

«УТВЕРЖДАЮ»

АО «ПРОТЕКО»




Чекова Е.С.
на основании Доверенности № 78 АВ 2124739
от 20 июля 2022 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Материал стоматологический адгезивный Tokuyama Universal Bond II в наборе
(наименование медицинского изделия)

Потребительская упаковка

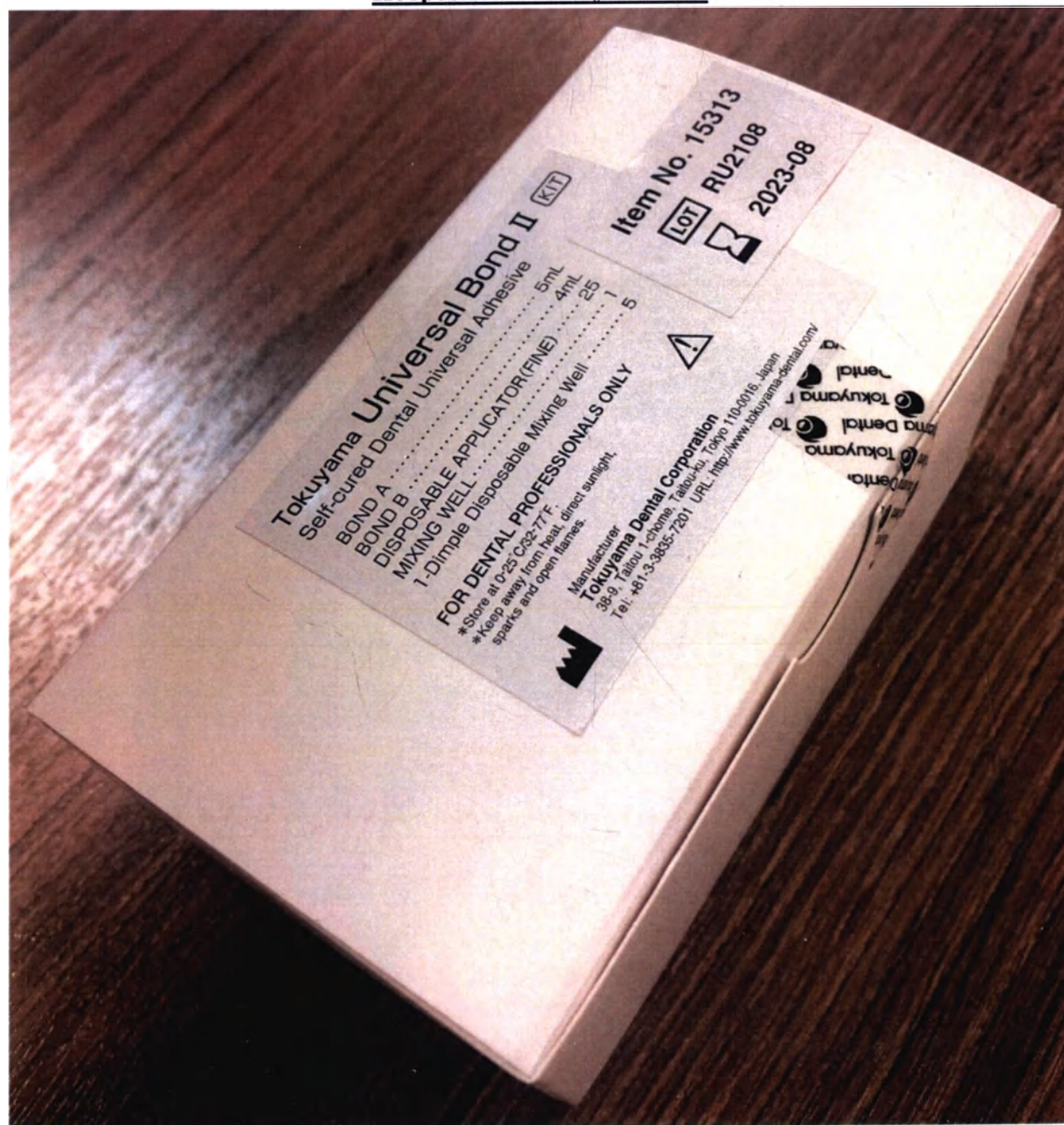

Общий вид набора

Клиническое руководство

Read instructions
before operation.

Инструкция-вкладыш

5255802105 Clinical Procedure
direct and indirect restorations that can be used with Self-etch, Selective-etch and Total-etch techniques. As a universal adhesive, Tokuyama Universal Bond II has been designed to be fully compatible with light-cured, self-cured and dual-cured composite materials such as glass-ionomer cements, acrylic resin and composite resin to indirect restorative materials such as glass-ceramics (porcelain), oxide-ceramics (zirconia and alumina), metals (precious and non-precious) and resin materials including inorganic filler (Bisphenol A di(2-hydroxypropoxy) dimethacrylate (Bis-GMA), Triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA), 2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA), MTU-6 (thiouracil monomer), Silane coupling agent, Peroxide, Borate catalyst, Acetone, Ethanol and Purified water.

INDICATIONS

- Direct anterior and posterior restorations with light-curing, dual-curing, and self-curing
- Note: Certain substances may react with the examination gloves, remove and dispose of the gloves when combined with light-cure, dual-cure or self-cure cements
- Bonding of denture resin to metal base, clasp or attachment
 - Repair of denture with metal base, clasp or attachment
 - Bonding of opaque resin to a metal base in the fabrication of resin-faced crowns


Компоненты

Bond A 5 мл (флакон)



Bond B 4 мл (флакон)

Палета для смешивания одноразовая

Палета для смешивания

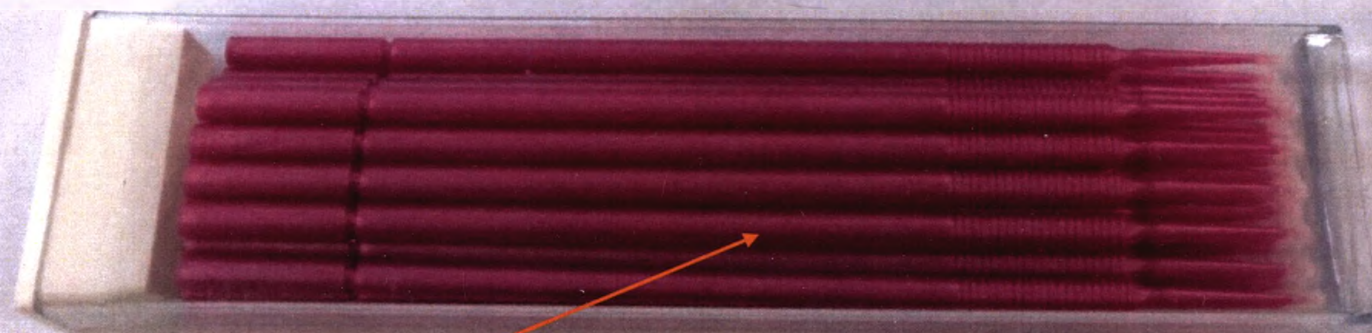

Проект маркировки потребительской упаковки Материал стоматологический
адгезивный Tokuyama Universal Bond II в наборе

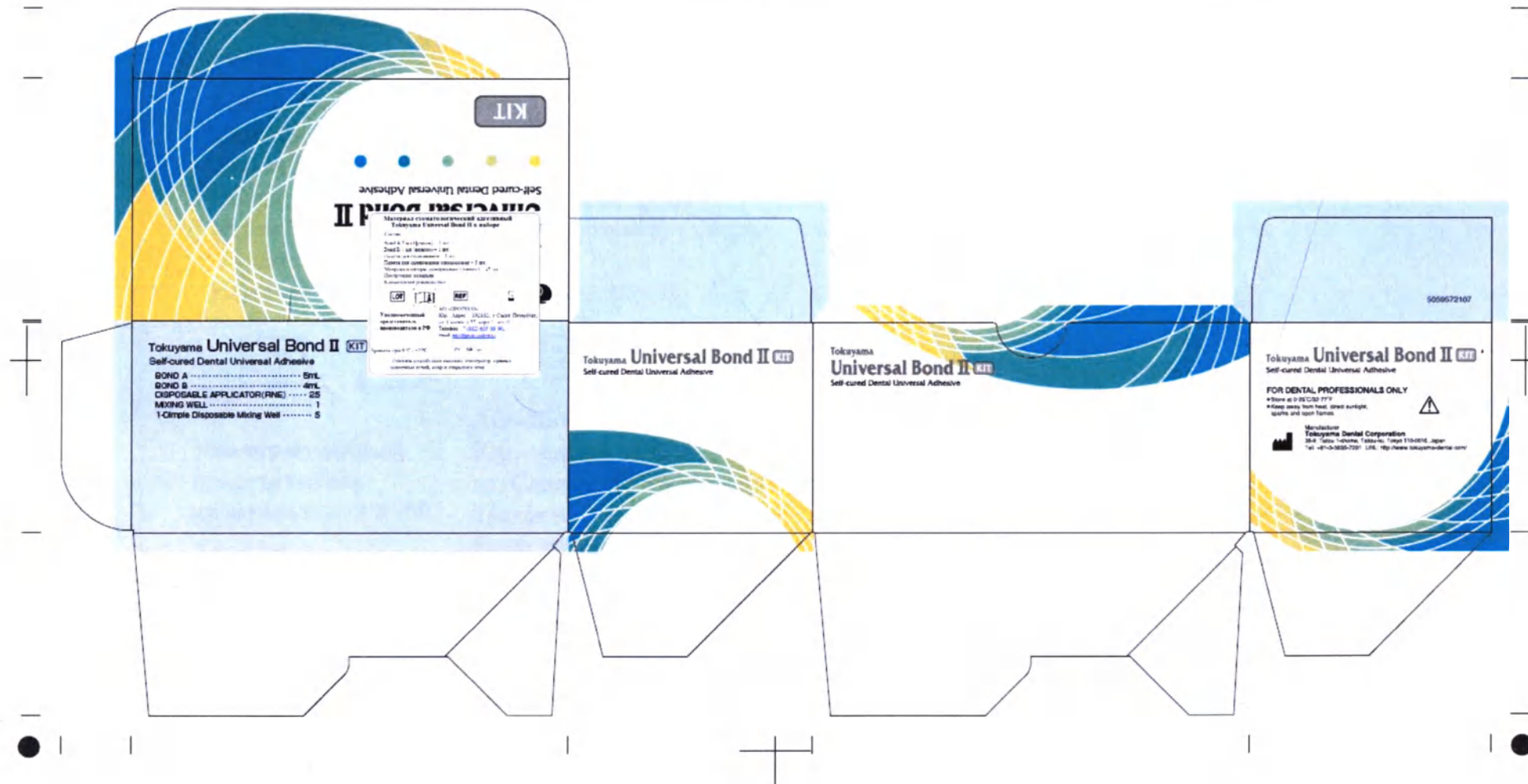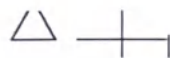

**Материал стоматологический адгезивный
Tokuyama Universal Bond II в наборе**

Состав:

Bond A 5 мл (флакон) – 1 шт.

Bond B 4 мл (флакон) – 1 шт.

Палета для смешивания – 1 шт.

Палета для смешивания одноразовая – 5 шт.

Микроапликаторы одноразовые (тонкие) – 25 шт.

Инструкция-вкладыш

Клиническое руководство.



Уполномоченный
представитель
производителя в РФ

АО «ПРОТЕКО»

Юр. Адрес 192102, г.Санкт-Петербург,
ул. Салова, д.57, корп.1, лит.И

Телефон [+7 \(812\) 635-88-90](tel:+7(812)635-88-90);

Email: info@protecodent.ru

Хранить при 0 °С - +25°С

РУ № от

Избегать воздействия высоких температур, прямых
солнечных лучей, искр и открытого огня

Маркировка Материала стоматологического адгезивного
Tokuyama Universal Bond II (Bond A, Bond B)

Фронтальная сторона



Оборотная сторона



Проект маркировки транспортной упаковки.

Наименование медицинского изделия

(Не указывается, если в транспортной
упаковке содержатся несколько
наименований изделий)



«Tokuyama Dental Corporation»
Tokyo, Japan

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 (*восемь*) листа(ов)

АО «ПРОТЕКО»

Чекова Е.С.

на основании Доверенности № 78 АВ 2124739 от 20.07.2022 г.

