

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Амплитек»

04.04.2023



А.В. Ходяков

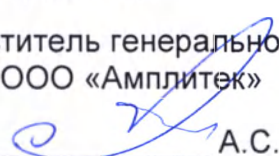
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РНК HCV В ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ
ОТ-ПЦР С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»
(AMPLITECH HCV) ПО ТУ 21.20.23-024-19926214-2023

Инструкция по применению версии 04.04.2023

Лист утверждения

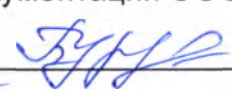
СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора по
науке ООО «Амплитек»

 А.С. Коновалов

04.04.2023

Руководитель отдела разработки
документации ООО «Амплитек»

 Д.А. Бурдачёва

04.04.2023

Amplitech HCV

Набор реагентов для качественного и количественного определения РНК HCV в плазме крови человека методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени» (Amplitech HCV) по ТУ 21.20.23-024-19926214-2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

IVD

REF P017-0

 96

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 НАЗНАЧЕНИЕ	4
2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
3 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	4
4 РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ	4
5 СОСТАВ	4
6 ПРИНЦИП МЕТОДА	5
6.1 Прослеживаемость значения положительного контроля ПК1 HCV.....	5
6.2 Характеристика положительного контроля ПК2 HCV	6
7 НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	6
8 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	6
9 ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	8
10 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	8
10.1 Экстракция РНК.....	8
10.2 Подготовка к проведению ОТ-ПЦР	9
10.3 Проведение ОТ-ПЦР и детекции	9
11 УЧЁТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ	10
12 ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ	11
13 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА	12
13.1 Контроли, используемые в процессе исследования	12
13.2 Мониторинг лаборатории на наличие контаминации.....	12
13.3 Внутренний контроль качества лабораторных исследований.....	13
14 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА	13
14.1 Предел обнаружения	13
14.2 Диапазон измерения и предел измерения.....	13
14.3 Аналитическая специфичность.....	13
14.4 Прецизионность измерения	14
14.5 Правильность измерения	15
14.6 Диагностические характеристики	15
14.7 Корреляция.....	15
15 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА	15
15.1 Срок годности.....	15
15.2 Хранение	15
15.3 Транспортирование	16
15.4 Эксплуатация	16
16 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	16
17 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ	16
18 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	17
19 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	17
20 СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	17

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящая инструкция по применению версии 04.04.23 распространяется на медицинское изделие «Набор реагентов для качественного и количественного определения РНК HCV в плазме крови человека методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени» (Amplitech HCV) по ТУ 21.20.23-024-19926214-2023» (далее – набор).

Краткое наименование набора: Amplitech HCV.

Набор следует применять в соответствии с действующей версией инструкции по применению. Для удобства работы в лаборатории допускается использовать действующую версию краткого руководства по применению набора.

2. Вирус гепатита С (HCV) – РНК-содержащий вирус из семейства *Flaviviridae*, который поражает печень. Метод ОТ-ПЦР позволяет выявлять РНК HCV в плазме крови спустя 7-12 дней после инфицирования, когда специфические антитела отсутствуют, что позволяет диагностировать заболевание на максимально ранних сроках. Выявление РНК HCV является подтверждением острого или хронического гепатита С.

Набор реагентов «Amplitech HCV» позволяет выявлять и количественно измерять РНК HCV.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Набор предназначен для качественного и количественного определения РНК HCV в плазме крови человека методом ОТ-ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Материалом для проведения ПЦР-исследования служат образцы РНК, экстрагированной из плазмы крови человека.

Набор предназначен для лабораторной диагностики *in vitro* (выявление и количественное определение вируса гепатита С). Применение набора не зависит от популяционных и демографических аспектов.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор предназначен для применения в клинической лабораторной диагностике для выявления и количественного определения вируса гепатита С. Отрицательные результаты исследования с помощью набора не исключают возможность инфицирования HCV и не должны использоваться в качестве единственной основы для принятия решения о лечении пациента. Отрицательные результаты исследования должны сочетаться с клиническими наблюдениями, историей болезни и эпидемиологической информацией.

Набор может применяться в клиничко-диагностических лабораториях.

3 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания к применению набора отсутствуют.

4 РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

При применении набора по назначению, в соответствии с данной инструкцией риски и побочные эффекты отсутствуют.

5 СОСТАВ

Состав набора¹ указан в таблице 1.

Таблица 1

Состав набора

Компонент	Номинальный объём, мл	Кол-во	Внешний вид
Смесь-1 HCV (Буферный раствор со специфическими праймерами, флуоресцентно-мечеными зондами и дНТФ)	0,96	1 пробирка	Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-лилового цвета
Смесь-2 Н (Буферный раствор с сульфатом магния, термостабильной ДНК-полимеразой, ревертазой)	0,96	1 пробирка	Прозрачная бесцветная жидкость
ВК О (Раствор, содержащий генно-инженерную конструкцию с РНК внутреннего контроля)	0,96	1 пробирка	Прозрачная бесцветная жидкость
ОК (Буферный раствор)	4,8	2 пробирки	Прозрачная бесцветная жидкость
ПК1 HCV (Раствор, содержащий генно-инженерную конструкцию с фрагментом РНК HCV)	4,8	2 пробирки	Прозрачная бесцветная жидкость

¹ Набор упакован в коробку из картона.

Компонент	Номинальный объем, мл	Кол-во	Внешний вид
ПК2 HCV (Раствор, содержащий генно-инженерную конструкцию с фрагментом РНК HCV)	4,8	2 пробирки	Прозрачная бесцветная жидкость
Инструкция по применению	–	1 шт.	В бумажном виде и электронном виде по адресу: http://www.amplitech.ru/resources/
Краткое руководство	–	1 шт.	В бумажном виде
Паспорт	–	1 шт.	В электронном виде ² по адресу: http://www.amplitech.ru/quality/

Набор рассчитан на проведение исследования 96 образцов, включая контроли.

6 ПРИНЦИП МЕТОДА

Исследование с помощью набора проводится методом ОТ-ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени». Детекция продуктов ОТ-ПЦР и раздельное выявление РНК HCV и внутреннего контроля (ВК) обеспечивается применением в реакционной смеси для ОТ-ПЦР флуоресцентно-меченых олигонуклеотидов, сигналы от которых регистрируются по различным каналам флуоресцентной детекции (см. таблицу 2).

Таблица 2

Каналы детекции мишеней

Канал детекции сигнала от флуорофора	Мишень	Область амплификации
FAM	РНК HCV	5' UTR - pol
Cy5	РНК ВК	Искусственно синтезированная последовательность

Линейная зависимость между исходной концентрацией РНК-мишени в исследуемом образце и циклом начала экспоненциального увеличения флуоресцентного сигнала (порогового цикла, Ct) позволяет определять концентрацию РНК HCV в образце относительно положительного контроля ПК1 HCV (образца с известной концентрацией РНК-мишени), который проходит этап экстракции РНК и ОТ-ПЦР одновременно с исследуемыми образцами. Определение концентрации РНК производится в соответствии с заданным значением концентрации ПК1 HCV и полученными значениями Ct для ПК1 HCV и исследуемых образцов.

6.1 Прослеживаемость значения положительного контроля ПК1 HCV

Концентрация клонированного фрагмента РНК HCV в ПК1 составляет HCV $5 \lg \pm 0,3 \lg$ МЕ/мл. Концентрация ПК1 HCV определяется с помощью установленной производителем методики выполнения измерений относительно стандартного образца предприятия (СОП) с аттестованным значением концентрации. Для определения концентрации СОП применяют набор реагентов для количественного определения РНК вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме «реального времени», зарегистрированный на территории РФ.

² В случае отсутствия доступа к Интернету обратитесь в службу технической поддержки по телефону (495) 374-13-46 для запроса о предоставлении бумажной версии паспорта.

6.2 Характеристика положительного контроля ПК2 HCV

Концентрация клонированного фрагмента РНК HCV в ПК2 HCV составляет $4 \lg \pm 0,3 \lg$ МЕ/мл. Концентрация ПК2 HCV определяется с помощью установленной производителем методики выполнения измерений относительно ПК1 HCV с аттестованным значением концентрации.

7 НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Для работы с набором требуются следующие оборудование и материалы:

- ПЦР-бокс;
- центрифуга-вортекс (ПУ № ФС № 2005/518);
- дозаторы переменного объема, механические или электронные, с возможностью дозирования от 10 до 200 мкл (ПУ № ФСР 2009/05681);
- программируемый амплификатор с системой детекции флуоресцентного сигнала в режиме «реального времени» (ДТпрайм (ООО «НПО ДНК-Технология»; ПУ № ФСЗ 2011/10229), CFX96 (Bio-Rad Laboratories, Inc.; ПУ № ФСЗ 2008/03399), Applied Biosystems QuantStudio 5 (Life Technologies Holdings Pte. Ltd.; ПУ № РЗН 2019/8446), Rotor-Gene Q (QIAGEN GmbH; ПУ № ФСЗ 2010/07595));
- штатив для пробирок объемом 0,2 и 1,5 мл;
- холодильник с камерой, поддерживающей температуру от 2 °С до 8 °С;
- пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл с оптически прозрачной крышкой, одноразовые, свободные от ДНКаза и РНКаза, при использовании амплификаторов планшетного типа;
- пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл с плоской крышкой, одноразовые, свободные от ДНКаза и РНКаза, при использовании амплификаторов роторного типа;
- пробирки объемом 1,5 мл, одноразовые, свободные от ДНКаза и РНКаза, для приготовления реакционной смеси;
- наконечники для дозаторов переменного объема, с фильтром, объемом до 100 и 200 мкл, одноразовые, свободные от ДНКаза и РНКаза;
- ёмкость для сброса использованных материалов;
- перчатки медицинские, одноразовые, неопудренные.

8 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Класс потенциального риска применения набора (согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ № 4н от 06.06.2012) – 3.

Работа должна проводиться в лаборатории, использующей методы амплификации нуклеиновых кислот для исследования материала, с соблюдением требований ГОСТ Р 52905 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности», МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

При работе необходимо всегда выполнять следующие требования:

- Применять набор по назначению в соответствии с данной инструкцией. Отклонение от прописанных процедур и порядка действий может привести к получению недостоверных результатов исследования.

- К работе с набором допускается только персонал, обученный методам молекулярной диагностики и правилам работы в клинко-диагностической лаборатории с освоением методов безопасной работы с патогенными биологическими агентами в соответствии с СанПиН 3.3686-21 (раздел IV).

- Рассматривать исследуемые образцы как инфекционно-опасные, организовывать работу и хранение в соответствии с СанПиН 3.3686-21.

- Утилизировать реагенты (использованные, неиспользованные, пришедшие в негодность в связи с истечением срока годности и/или несоблюдением регламентированного режима хранения, транспортирования и применения) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» к утилизации медицинских отходов класса Г.

- Не открывать пробирки с продуктами амплификации в процессе их сбора и утилизации.

- Утилизировать внешнюю упаковку набора, инструкцию по применению и краткое руководство в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 к утилизации медицинских отходов класса А.

- Утилизировать биологический материал, а также расходные материалы и инструменты, загрязнённые биологическим материалом, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 к утилизации медицинских отходов класса В.

- Не использовать набор, если нарушена внутренняя упаковка или внешний вид реагента не соответствует описанию, указанному в таблице 1.

- Не использовать набор, если не соблюдались условия транспортирования и хранения согласно инструкции.

- Не использовать набор по истечении срока годности.

- Использовать отдельный для каждого образца/реагента одноразовый наконечник с фильтром.

- Использовать защитную одежду в соответствии с МУ 1.3.2569-09. Все операции проводить только в одноразовых неопудренных перчатках для исключения контакта с организмом человека.

- Не есть, не пить и не курить в процессе использования набора. Избегать контакта реагентов с кожей, глазами и слизистой оболочкой. Не глотать.

Реагенты, входящие в состав набора, содержат натрия азид в концентрации не более 0,05 %, поэтому не классифицируются как опасные для здоровья человека и

окружающей среды. При контакте немедленно промыть поражённое место большим количеством воды и при плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью. При попадании внутрь рвоту не вызывать, прополоскать рот водой, обратиться к врачу при плохом самочувствии.

Использование набора по назначению и соблюдение вышеперечисленных мер предосторожности исключает негативное воздействие на организм человека.

9 ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Набор предназначен для исследования только плазмы крови человека. Взятие, предварительную обработку, транспортирование и хранение биологического материала следует проводить в соответствии с:

- МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности»;
- требованиями, перечисленными в таблице 3.

Таблица 3

Требования к взятию, предварительной обработке, условиям транспортирования и хранения исследуемого материала

Взятие и предобработка	Условия транспортирования и хранения
Взятие цельной крови Взятие цельной крови провести натошак или через 3 ч после приёма пищи в пробирку с антикоагулянтом (раствором ЭДТА). ВНИМАНИЕ! Недопустимо использовать гепарин в качестве антикоагулянта. Тщательно перемешать кровь с антикоагулянтом, несколько раз перевернув пробирку.	При температуре от 2 °С до 8 °С не более суток. ВНИМАНИЕ! Недопустимо замораживание цельной крови.
Предобработка для получения плазмы Пробирки с цельной кровью центрифугировать 20 мин при 800–1600 x g при комнатной температуре. Затем отобрать плазму в количестве не менее 1 мл с использованием отдельного для каждого образца наконечника с фильтром в стерильные одноразовые пробирки.	• При температуре от 2 °С до 8 °С не более 5 суток; • При температуре минус 20 °С не более года; • При температуре минус 70 °С длительно; • Допускается однократное замораживание материала.

10 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

10.1 Экстракция РНК

Провести экстракцию РНК из исследуемого материала и контролей с использованием набора реагентов «НК-400» (ООО «Амплитек») согласно инструкции по его применению, с учётом требований к объёмам реагентов, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Требования к объёмам реагентов при экстракции РНК

Реагент	Объём реагента для одного образца
ВК О	10 мкл
Реагент для элюции РНК	70 мкл при объёме образца 400 мкл/ 100 мкл при объёме образца 800 мкл

ВНИМАНИЕ! Каждая группа экстрагируемых образцов должна сопровождаться постановкой контролей ОК, ПК1, ПК2 не менее чем в одном повторе. Перед использованием контролей перемешать их и осадить капли на вортексе.

10.2 Подготовка к проведению ОТ-ПЦР

ВНИМАНИЕ! Компоненты реакционной смеси следует смешивать непосредственно перед проведением ОТ-ПЦР.

10.2.1 Перемешать содержимое пробирок с реагентами Смесь-1 HCV, Смесь-2 Н и осадить капли на вортексе.

10.2.2 Приготовить реакционную смесь, добавив компоненты в отдельную пробирку в объёмах согласно таблице 5. Перемешать и осадить капли на вортексе.

Таблица 5

Объёмы компонентов реакционной смеси

Компонент	Объём компонента для одного образца, мкл	Примечание
Смесь-1 HCV	10	При расчёте объёмов реагентов для общего количества исследуемых и контрольных образцов необходимо учитывать запас каждого реагента не менее чем на один образец.
Смесь-2 Н	10	

10.2.3 Отобрать необходимое количество пробирок для проведения ОТ-ПЦР с РНК исследуемых образцов и контролей (ОК, ПК1 HCV, ПК2 HCV). Промаркировать.

10.2.4 Внести в пробирки по 20 мкл приготовленной реакционной смеси.

10.2.5 Внести в подготовленные пробирки с реакционной смесью по 30 мкл образцов РНК, полученных в результате экстракции из исследуемых образцов и контролей.

ВНИМАНИЕ! При внесении РНК необходимо избегать попадания сорбента в реакционную смесь.

10.3 Проведение ОТ-ПЦР и детекции

10.3.1 Запрограммировать амплификатор для проведения ОТ-ПЦР и детекции флуоресцентного сигнала согласно инструкции по его применению по программе, указанной в таблице 6.

Таблица 6

Программа ОТ-ПЦР и детекции

Цикл	Температура, °С	Время	Детекция по каналам для флуорофоров	Количество циклов
1	50	15 мин	—	1
2	95	15 мин	—	1
3	95	10 с	—	42
	60	20 с	FAM, Cy5	

Примечания

1) При программировании амплификатора указать объём реакции: 50 мкл.

2) Детекция может назначаться по другим каналам, помимо указанных, при одновременном проведении в одном приборе нескольких тестов с использованием указанной программы.

10.3.2 Поместить пробирки с реакционной смесью и элюатом в амплификатор и запустить программу.

Примечание – Перед постановкой в амплификатор планшетного типа рекомендуется осадить капли со стенок пробирок на вортексе.

11 УЧЁТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

11.1 Учёт результатов осуществляется с помощью программного обеспечения используемого амплификатора согласно инструкции по его применению. Рекомендуется выставлять пороговую линию на уровне 10 % от разгорания положительного контроля. Кривые флуоресценции, пересекающие пороговую линию, должны иметь сигмообразную форму.

11.2 Проверить наличие значений C_t для исследуемого образца по каналам FAM, Cy5.

11.3 При наличии значений C_t по каналу FAM рассчитать концентрацию РНК HCV в международных единицах измерения в одном миллилитре (МЕ/мл) согласно формуле (1).

$$C_{\text{РНК HCV}} = \frac{C_{\text{ПК1}}}{2 (\Delta C_t - \Delta C_t \text{ ВК})} \quad (1)$$

где $C_{\text{РНК HCV}}$ – концентрация РНК HCV, МЕ/мл;

$C_{\text{ПК1}}$ – концентрация РНК HCV в ПК1, МЕ/мл (значение концентрации указано в кратком руководстве для используемого лота набора);

ΔC_t – разность между значением порогового цикла (C_t) для исследуемого образца и значением C_t для ПК1 по каналу FAM;

$\Delta C_t \text{ ВК}$ – разность между значением C_t для исследуемого образца и значением C_t для ПК1 по каналу Cy5.

11.4 Провести интерпретацию результатов для исследуемых образцов согласно таблице 7.

Таблица 7

Интерпретация результатов для исследуемых образцов

Результат	Интерпретация
Качественное определение РНК HCV	
По каналу Cy5 значение C_t определено не больше граничного ³ . По каналу FAM значение C_t отсутствует.	РНК HCV в образце не выявлена.
По каналу Cy5 значение C_t определено или отсутствует. По каналу FAM определено значение C_t .	В образце выявлена РНК HCV.
По каналу Cy5 значение C_t отсутствует или определено больше граничного. По каналу FAM значение C_t отсутствует.	Невалидный результат

³ Граничные значения C_t указаны в кратком руководстве по применению набора.

Результат	Интерпретация
Количественное определение РНК HCV	
По каналу Cy5 значение Ct определено не больше граничного. По каналу FAM значение Ct отсутствует.	РНК HCV в образце <i>не выявлена</i> .
Рассчитано значение концентрации РНК HCV, укладывающееся в диапазон измерения набора.	РНК HCV в образце <i>выявлена</i> в концентрации в пределах диапазона измерения набора.
Рассчитано значение концентрации РНК HCV, не укладывающееся в диапазон измерения набора.	РНК HCV в образце <i>выявлена</i> в концентрации вне пределов диапазона измерения набора.
По каналу Cy5 значение Ct отсутствует или определено больше граничного. По каналу FAM значение Ct отсутствует.	Невалидный результат

Результат исследования считают достоверным, если получены валидные результаты для контролей в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

Критерии оценки для контролей

Контроль	Норма
ОК	По каналу Cy5 значение Ct определено не больше граничного ⁴ . По каналу FAM значение Ct отсутствует.
ПК1	По каналам FAM, Cy5 значение Ct определено не больше граничного.
ПК2	По каналам FAM, Cy5 значение Ct определено не больше граничного. Рассчитанное значение ⁵ концентрации ПК2 укладывается в диапазон $\pm 0,5$ lg относительно значения, указанного в кратком руководстве для используемого лота набора.

12 ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ

Рекомендации по устранению возможных ошибок, получаемых для исследуемых образцов и контролей в процессе исследования с помощью набора, указаны в таблице 9.

Таблица 9

Рекомендации по устранению ошибок

Ошибка	Возможная причина возникновения	Рекомендации по устранению
Для ПК1 значение Ct по каналу FAM и/или Cy5 отсутствует или определено больше граничного ⁴ .	Некорректное проведение экстракции РНК и/или ОТ-ПЦР.	Повторить исследование для всех образцов, начиная с этапа экстракции РНК.
Для ПК2 значение концентрации определено вне заданного диапазона.		
Для ОК и/или ПК2 по каналу Cy5 значение Ct отсутствует или определено больше граничного.		
Для ОК по каналу FAM определено значение Ct.	Контаминация реагентов или	Предпринять меры по выявлению и ликвидации источника

⁴ Граничные значения Ct указаны в кратком руководстве по применению набора.

⁵ Концентрация ПК2 рассчитывается по формуле (1), как для исследуемого образца.

Ошибка	Возможная причина возникновения	Рекомендации по устранению
	исследуемых образцов продуктами амплификации.	контаминации и повторить исследование для всех образцов, начиная с этапа экстракции РНК.
Невалидный результат для исследуемого образца (значение Ct по каналу Cy5 отсутствует или определено больше граничного, по каналу FAM значения Ct отсутствуют).	Некорректное проведение экстракции РНК. Наличие в образце ингибиторов ОТ-ПЦР.	Повторить исследование данного исследуемого образца, начиная с этапа экстракции РНК. В случае воспроизводимого результата рекомендуется повторное взятие и исследование биологического материала.
Для исследуемого образца/контролей определено значение порогового цикла, при этом на графике флуоресценции отсутствует участок характерного экспоненциального подъёма (график представляет собой приблизительно прямую линию).	Некорректный выбор уровня пороговой линии или параметров расчёта базовой линии. Некорректное проведение ОТ-ПЦР.	Проверить правильность выбранного уровня пороговой линии или параметров расчёта базовой линии. Если результат получен при правильном уровне пороговой линии (базовой линии), требуется повторно провести амплификацию и детекцию для этого образца или, в случае некорректного вида графика для контроля, амплификацию и детекцию для всех исследуемых образцов и контролей

13 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

13.1 Контроли, используемые в процессе исследования

Результаты исследования контролей должны соответствовать критериям оценки, указанным в разделе 11.

13.1.1 Отрицательный и положительные контроли

Каждая группа экстрагируемых образцов должна включать контрольные образцы:

- ОК для выявления контаминации в процессе проведения исследования;
- ПК1 HCV для контроля корректного прохождения исследования, а также для количественного определения РНК HCV;
- ПК2 HCV для контроля корректности расчёта концентрации РНК HCV.

13.1.2 Внутренний контроль

Для контроля качества экстракции РНК и оценки влияния ингибиторов на результаты амплификации используется экзогенный ВК, который добавляется на этапе экстракции РНК в каждый исследуемый образец и контроли. Отсутствие результатов амплификации для ВК и одновременно для РНК HCV свидетельствует о присутствии ингибиторов ОТ-ПЦР в образце или некорректном проведении экстракции РНК.

13.2 Мониторинг лаборатории на наличие контаминации

Для выявления возможной контаминации лаборатории продуктами амплификации, исследуемыми и контрольными образцами рекомендуется раз в месяц исследовать смывы с рабочих поверхностей лабораторной мебели, оборудования и поверхностей

помещений согласно процедуре, указанной в МУ 1.3.2569-09. При обнаружении контаминации необходимо провести мероприятия по её устранению согласно указаниям, описанным в МУ 1.3.2569-09.

13.3 Внутренний контроль качества лабораторных исследований

Рекомендуется проводить контроль качества выполнения исследований с использованием панелей контрольных образцов, предназначенных для проведения внутреннего и внешнего контролей качества лабораторных исследований по обнаружению и количественному определению РНК HCV, либо сравнительным исследованием с использованием зарегистрированных в РФ наборов реагентов для качественного и количественного определения РНК HCV в биологическом материале методом ОТ-ПЦР.

14 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА⁶

14.1 Предел обнаружения

Предел обнаружения набора составляет:

- 20 МЕ РНК HCV в 1 мл исследуемого материала (95 % ДИ: 6,43–24,73 МЕ/мл) при экстракции из 400 мкл плазмы крови;
- 10 МЕ РНК HCV в 1 мл исследуемого материала (95 % ДИ: 3,09–11,71 МЕ/мл) при экстракции из 800 мкл плазмы крови.

14.2 Диапазон измерения и предел измерения

Диапазон измерения набора составляет:

- от 50 до 100000000 МЕ РНК HCV в 1 мл исследуемого материала при экстракции из 400 мкл плазмы крови;
- от 25 до 100000000 МЕ РНК HCV в 1 мл исследуемого материала при экстракции из 800 мкл плазмы крови.

Предел измерения набора совпадает с нижней границей диапазона измерения набора.

14.3 Аналитическая специфичность

Аналитическая специфичность набора оценивалась при тестировании микроорганизмов, указанных в таблице 10, и геномной ДНК человека. НК микроорганизмов исследовалась в концентрации не менее $1 \cdot 10^6$ копий/мл, геномная ДНК человека - в концентрации 1 мкг/мл. По итогам тестирования ложноположительных результатов выявлено не было.

Таблица 10

Микроорганизмы, используемые для оценки аналитической специфичности

Наименование	Наименование	Наименование
<i>Staphylococcus aureus</i>	CMV	HIV

⁶ Заявленные аналитические характеристики набора, кроме аналитической специфичности, проверены с использованием стандартных образцов предприятия, содержащих вектор со специфической последовательностью РНК HCV.

Наименование	Наименование	Наименование
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	EBV	HHV6
<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	HAV	HSV 1 типа
<i>Streptococcus agalactiae</i>	HBV	HSV 2 типа
<i>Streptococcus pyogenes</i>	HDV	VZV

14.3.1 Потенциально интерферирующие вещества

Потенциально интерферирующие вещества (ингибиторы ОТ-ПЦР) и их максимальные концентрации в образце, для которых оценивалось их ингибирующее влияние на ОТ-ПЦР, перечислены в таблице 11.

Таблица 11

Потенциально интерферирующие вещества

Интерферент	Активный компонент	Тип интерферента	Концентрация вещества в образце	Обоснование исследованной концентрации
Цельная кровь	Гемоглобин, холестерин, триглицериды	Эндогенная субстанция	10 % v/v	Объем в образце в условиях «наихудшего случая»
Гепарин	Гепарин	Антикоагулянт	0,15 МЕ/мл	Концентрация в вакуумной пробирке
ЭДТА-К2	ЭДТА-К2		0,5 мМ/мл	
Лайфферон®	Интерферон альфа-2b	Препараты, назначаемые при терапии гепатитов	500 МЕ/мл	Двукратное превышение максимальной терапевтической концентрации в плазме
Рибавирин	Рибавирин		0,04 мг/мл	

Наличие возможного ингибирующего эффекта оценивалось путём проведения процедуры экстракции РНК⁷ из образцов биологического материала, в которые добавлялись потенциальные интерференты в концентрациях согласно таблице 11 и стандартный образец предприятия, содержащий РНК HCV в концентрации 40 МЕ/мл. Далее с экстрагированными образцами проводили ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени» с использованием набора реагентов «Amplitech HCV».

По результатам оценки было определено вещество (гепарин), ингибирующее ОТ-ПЦР, а также показано, что влияние остальных испытанных веществ в концентрациях согласно таблице 11 на ОТ-ПЦР, проводимую с использованием набора «Amplitech HCV», отсутствует.

14.4 Прецизионность измерения

Коэффициент вариации повторяемости CV_n значений концентрации, характеризующий внутрисерийную повторяемость измерений с использованием набора, не превышает 5 %.

Коэффициент вариации воспроизводимости CV_b значений концентрации, характеризующий межсерийную воспроизводимость измерений с использованием набора, не превышает 10 %.

⁷ Экстракция проводилась с использованием набора реагентов «НК-400» (ООО «Ампитек»).

14.5 Правильность измерения

Систематическая погрешность, характеризующая правильность измерения с использованием набора, не превышает 15 %.

14.6 Диагностические характеристики

Значения диагностической чувствительности (ДЧ) и диагностической специфичности (ДС) набора с доверительной вероятностью 95 % указаны в таблице 12.

Таблица 12

Диагностические характеристики

Объём образца при экстракции, мкл	Количество образцов		ДЧ, %	ДС, %
	положит.	отрицат.		
400	100	100	97,0 – 100	97,0 – 100
800	100	100	97,0 – 100	97,0 – 100

14.7 Корреляция

Корреляция экспериментальных значений концентраций, полученных при исследовании образцов биологического материала с использованием набора реагентов «Amplitech HCV» и референтного набора реагентов, представлена на рисунке 1.

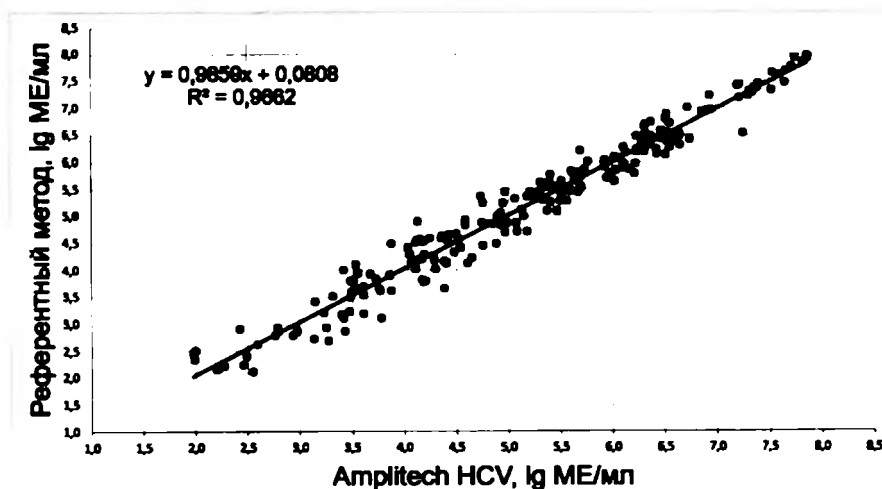


Рисунок 1

15 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

15.1 Срок годности

Срок годности набора составляет 12 месяцев от даты изготовления.

После вскрытия реагенты использовать до истечения срока годности набора.

15.2 Хранение

Набор хранить при температуре от 2 °С до 8 °С в защищённом от солнечного света месте.

Реагенты после вскрытия хранить в тех же условиях, что и реагенты до вскрытия.

15.3 Транспортирование

Набор транспортировать при температуре от 2 °С до 8 °С всеми видами крытых транспортных средств в термоконтейнерах с хладоэлементами или в авторефрижераторах.

15.4 Эксплуатация

Реагенты, входящие в состав набора, готовы к использованию.

Повторное применение использованных для исследования реагентов не допускается.

Исследование образцов с использованием набора должно проводиться при температуре от 18 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха от 25 % до 75 %.

16 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

В настоящей инструкции применены следующие сокращения:

Ct	– cycle threshold (пороговый цикл)
в.	– версия
ВК	– внутренний контроль
ДИ	– доверительный интервал
ДНК	– дезоксирибонуклеиновая кислота
ДНКаза	– дезоксирибонуклеаза
ОК	– отрицательный контроль
ОТ	– обратная транскрипция
ПК	– положительный контроль
ПЦР	– полимеразная цепная реакция
РНК	– рибонуклеиновая кислота
РНКаза	– рибонуклеаза

17 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ГОСТ Р 51088-2013 Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Реагенты, наборы реагентов, тест-системы, контрольные материалы, питательные среды. Требования к изделиям и поддерживающей документации

ГОСТ Р 51352-2013 Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Методы испытаний

ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015 Медицинские изделия для диагностики *in vitro*. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики *in vitro* для профессионального применения

ГОСТ Р ИСО 23840-2015 Изделия медицинские для диагностики *in vitro*. Оценка стабильности реагентов для диагностики *in vitro*

ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

18 ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие характеристик набора требованиям, указанным в технической и эксплуатационной документации, в течение указанного срока годности при соблюдении условий его транспортирования, хранения и применения.

Рекламации на качество набора направлять в адрес производителя: ООО «Амплитек», 109235, Москва, ул. 1-я Курьяновская, д. 34, стр. 8, этаж 1 пом. II ком. 42, тел. (495) 374-13-46, e-mail: support@amplitech.ru.

Сообщения о неблагоприятных событиях (инцидентах), возникших при работе с набором и не указанных в данной инструкции, следует направлять производителю по указанному выше адресу и в уполномоченный регуляторный орган согласно действующему законодательству.

19 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Консультацию по вопросам по работе с набором и его качеству можно получить по контактам, указанным на официальном сайте производителя: www.amplitech.ru.

20 СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Изготовитель



Номер по каталогу



Дата изготовления



Код серии



Медицинское изделие для диагностики *in vitro*



Использовать до



Обратитесь к инструкции по применению



Предел температуры



Содержимого достаточно для проведения п тестов



Не допускать воздействия солнечного света



Общество с ограниченной ответственностью «Амплитек»
(ООО «Амплитек»),
Россия, 109235, Москва,
ул. 1-я Курьяновская, д. 34, стр. 8, этаж 1 пом. II ком. 42
тел. (495) 374-13-46, www.amplitech.ru,
e-mail: support@amplitech.ru

Лист регистрации изменений

[illegible]

Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью 19 листа(ов)

Генеральный директор

ООО «Амплитек»

Ходяков А.В.

Подпись

Ходяков А.В.



ПРОШИТО

В КОЛИЧЕСТВЕ 19 ЛИСТОВ

«25» 04 2023 год

Ген. Директор

ООО «ВЫМПЕЛ-МЕДЦЕНТР»

Варнавичус П.К.



КОПИЯ
ВЕРНА

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Амплитек»

04.04.2023



НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РНК HCV В ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ
ОТ-ПЦР С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»
(AMPLITECH HCV) ПО ТУ 21.20.23-024-19926214-2023

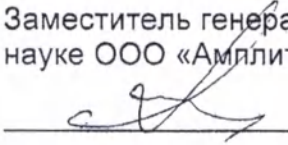
Краткое руководство версии 04.04.23

Лист утверждения

СОГЛАСОВАНО

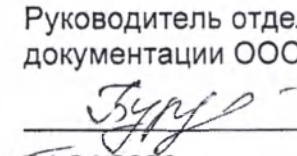
Заместитель генерального директора по
науке ООО «Амплитек»

04.04.2023

 А.С. Коновалов

Руководитель отдела разработки
документации ООО «Амплитек»

04.04.2023

 Д.А. Бурдачёва

Amplitech HCV

Набор реагентов для качественного и количественного определения РНК HCV в плазме крови человека методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени» (Amplitech HCV) по ТУ 21.20.23-024-19926214-2023

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

IVD

REF P017-0

LOT xxxx

Σ 96

ВНИМАНИЕ! Перед использованием набора необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению.

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор предназначен для качественного и количественного определения РНК HCV в плазме крови человека методом ОТ-ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Материалом для проведения ПЦР-исследования служат образцы РНК, экстрагированной из плазмы крови человека.

Набор предназначен для лабораторной диагностики *in vitro* (выявление и количественное определение вируса гепатита С). Применение набора не зависит от популяционных и демографических аспектов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Набор предназначен для применения в клинической лабораторной диагностике для выявления и количественного определения вируса гепатита С. Отрицательные результаты исследования с помощью набора не исключают возможность инфицирования HCV и не должны использоваться в качестве единственной основы для принятия решения о лечении пациента. Отрицательные результаты исследования должны сочетаться с клиническими наблюдениями, историей болезни и эпидемиологической информацией.

Набор может применяться в клинко-диагностических лабораториях.

РЕАГЕНТЫ

Реагент	Внешний вид	Меры предосторожности
Смесь-1 HCV	Прозрачная бесцветная жидкость	Реагенты содержат азид натрия в концентрации не более 0,05 % веществ, поэтому не классифицируются как опасные для здоровья человека и окружающей среды. При контакте немедленно промыть пораженное место большим количеством воды и при плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью. При попадании внутрь рвоту не вызывать, прополоскать рот водой, обратиться к врачу при плохом самочувствии.
Смесь-2 Н		
ВК О		
ОК		
ПК1 HCV		
ПК2 HCV		

ЭКСТРАКЦИЯ РНК, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОТ-ПЦР И ДЕТЕКЦИИ

- 1 Провести экстракцию РНК с использованием набора реагентов «НК-400» (ООО «Амплитек») согласно инструкции по его применению, с учётом требований к объёмам реагентов и образцов, указанных ниже.

ВК О	10 мкл	в каждую пробирку/ячейку планшета
Реагент для элюции РНК	70 мкл при объёме образца 400 мкл/ 100 мкл при объёме образца 800 мкл	в каждую пробирку/ячейку планшета

ВНИМАНИЕ! Каждая группа экстрагируемых образцов должна сопровождаться постановкой контролей ОК, ПК1, ПК2 не менее чем в одном повторе. Перед использованием контролей перемешать их и осадить капли на вортексе.

- 2 Перемешать содержимое пробирок с реагентами Смесь-1 HCV, Смесь-2 Н и осадить капли на вортексе.
- 3 Приготовить реакционную смесь, добавив компоненты в отдельную пробирку в объёмах, указанных ниже. Перемешать и осадить капли на вортексе.

Компонент	Объём компонента для одного образца	Примечание
Смесь-1 HCV	10 мкл	При расчёте объёмов реагентов для общего количества исследуемых и контрольных образцов необходимо учитывать запас каждого реагента не менее чем на один образец.
Смесь-2 Н	10 мкл	

ВНИМАНИЕ! Компоненты реакционной смеси следует смешивать непосредственно перед проведением ОТ-ПЦР.

- 4 Отобрать необходимое количество пробирок для проведения ОТ-ПЦР с РНК исследуемых образцов и контролей (ОК, ПК1 HCV, ПК2 HCV). Промаркировать.
- 5 Внести в пробирки по 20 мкл приготовленной реакционной смеси.
- 6 Внести в подготовленные пробирки с реакционной смесью по 30 мкл образцов РНК, полученных в результате экстракции из исследуемых образцов и контролей.

ВНИМАНИЕ! При внесении РНК необходимо избегать попадания сорбента в реакционную смесь.

- 7 Запрограммировать амплификатор для проведения ОТ-ПЦР и детекции флуоресцентного сигнала согласно инструкции по его применению по программе, указанной ниже:

Цикл	Температура, °C	Время	Детекция по каналам для флуорофоров	Количество циклов
1	50	15 мин	—	1
2	95	15 мин	—	1
3	95	10 с	—	42
	60	20 с	FAM, Cy5	

Примечания

- 1) При программировании амплификатора указать объём реакции: 50 мкл.
- 2) Детекция может назначаться по другим каналам, помимо указанных, при одновременном проведении в одном приборе нескольких тестов с использованием указанной программы.

- 8 Поместить пробирки в амплификатор и запустить программу.

Примечание – Перед постановкой в амплификатор планшетного типа рекомендуется осадить капли со стенок пробирок на вортексе.

УЧЁТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ

- 1 Учёт результатов осуществляется с помощью программного обеспечения используемого амплификатора согласно инструкции по его применению. Рекомендуется выставить пороговую линию на уровне 10 % от разгорания положительного контроля. Кривые флуоресценции, пересекающие пороговую линию, должны иметь сигмообразную форму.
- 2 Проверить наличие значений Ct для исследуемого образца по каналам FAM, Cy5. Каналы детекции мишеней указаны в таблице, приведённой ниже.

Канал детекции	Мишень
FAM	РНК HCV
Cy5	РНК ВК

- 3 При наличии значений Ct по каналу FAM рассчитать концентрацию РНК HCV в международных единицах измерения в одном миллилитре (МЕ/мл) согласно формуле (1).

$$C_{\text{РНК HCV}} = \frac{C_{\text{ПК1}}}{2 (\Delta Ct - \Delta Ct_{\text{BK}})} \quad (1)$$

где $C_{\text{РНК HCV}}$ – концентрация РНК HCV, МЕ/мл;

$C_{\text{ПК1}}$ – концентрация РНК HCV в ПК1, МЕ/мл;

ΔCt – разность между значением порогового цикла (Ct) для исследуемого образца и значением Ct для ПК1 по каналу FAM;

ΔCt_{BK} – разность между значением Ct для исследуемого образца и значением Ct для ПК1 по каналу Cy5.

Значения концентрации контролей указаны в таблице, приведённой ниже.

Контроль	Значение концентрации	
	МЕ/мл	Ig (МЕ/мл)
ПК1 HCV	XXXXXX	X,XX
ПК2 HCV	XXXXXX	X,XX

- 4 Провести интерпретацию результатов для исследуемых образцов согласно таблицам, приведённым ниже.

Качественное определение РНК HCV

Значение порогового цикла (Ct) по каналу		Интерпретация
FAM	Cy5	
отсутствует	≤ 35	РНК HCV в образце <i>не выявлена</i> .
<u>определено</u>	определено или отсутствует	В образце <i>выявлена</i> РНК HCV.
отсутствует	> 35 или отсутствует	Невалидный результат

Количественное определение РНК HCV

Результат	Интерпретация
По каналу Cy5 значение Ct определено не больше 35. По каналу FAM значение Ct отсутствует.	РНК HCV в образце <i>не выявлена</i> .
Рассчитано значение концентрации РНК HCV, укладывающееся в диапазон измерения набора.	РНК HCV в образце <i>выявлена</i> в концентрации в пределах диапазона измерения набора.
Рассчитано значение концентрации РНК HCV, не укладывающееся в диапазон измерения набора.	РНК HCV в образце <i>выявлена</i> в концентрации вне пределов диапазона измерения набора.
По каналу Cy5 значение Ct отсутствует или определено больше 35. По каналу FAM значение Ct отсутствует.	Невалидный результат

- 5 Результат исследования считают достоверным, если получены валидные результаты для контролей в соответствии с таблицей, приведённой ниже.

Контроль	Значение порогового цикла (Ct) по каналу		Значение концентрации, Ig (МЕ/мл)
	FAM	Cy5	
ОК	отсутствует	≤ 35	–
ПК1	≤ 29	≤ 35	–
ПК2 ¹	≤ 32	≤ 35	X,XX $\pm$ 0,5

- 6 Рекомендации по устранению возможных ошибок в процессе проведения исследования указаны в таблице, приведённой ниже.

Ошибка	Возможная причина возникновения	Рекомендации по устранению
Для ПК1 значение Ct по каналу FAM и/или Cy5 отсутствует или определено больше граничного. Для ПК2 значение концентрации определено вне заданного диапазона.	Некорректное проведение экстракции РНК и/или ОТ-ПЦР.	Повторить исследование для всех образцов, начиная с этапа экстракции РНК.

¹ Концентрация ПК2 рассчитывается по формуле (1), как для исследуемого образца.

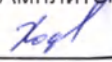
Для ОК и/или ПК2 по каналу Cy5 значение Ct отсутствует или определено больше граничного.		
Для ОК по каналу FAM определено значение Ct.	Контаминация реагентов или исследуемых образцов продуктами амплификации.	Предпринять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации и повторить исследование для всех образцов, начиная с этапа экстракции РНК.
Невалидный результат для исследуемого образца (значение Ct по каналу Cy5 отсутствует или определено больше граничного, по каналу FAM значение Ct отсутствует).	Некорректное проведение экстракции РНК. Наличие в образце ингибиторов ОТ-ПЦР.	Повторить исследование данного исследуемого образца, начиная с этапа экстракции РНК. В случае воспроизводимого результата рекомендуется повторное взятие и исследование биологического материала.
Для исследуемого образца/контролей определено значение порогового цикла, при этом на графике флуоресценции отсутствует участок характерного экспоненциального подъёма (график представляет собой приблизительно прямую линию).	Некорректный выбор уровня пороговой линии или параметров расчёта базовой линии. Некорректное проведение ОТ-ПЦР.	Проверить правильность выбранного уровня пороговой линии или параметров расчёта базовой линии. Если результат получен при правильном уровне пороговой линии (базовой линии), требуется повторно провести амплификацию и детекцию для этого образца или, в случае некорректного вида графика для контроля, амплификацию и детекцию для всех исследуемых образцов и контролей.

Лист регистрации изменений

[illegible]

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6 листа(ов)

Генеральный директор
ООО «Амплитек»


Подпись

Ходяков А.В.



КОПИЯ
ВЕРНА

ПАСПОРТ № 441-23

Amplitech HCV

Набор реагентов для качественного и количественного определения РНК HCV в плазме крови человека методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени» (Amplitech HCV) по ТУ 21.20.23-024-19926214-2023

REF P017-0

LOT 0441

 2023-04-06

 2024-04-06

Условия транспортирования: при температуре от 2 °С до 8 °С всеми видами крытых транспортных средств в термоконтейнерах с хладоэлементами или в авторефрижераторах.

Условия хранения: при температуре от 2 °С до 8 °С в защищённом от солнечного света месте.

Контроль качества набора проведён по ТУ 21.20.23-024-19926214-2023.

Состав набора и внешний вид компонентов

Лот компонента	Норма			Результат контроля
	наименование	количество	внешний вид	
00004	Смесь-1 HCV	0,96 мл x 1 пробирка	Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-лилового цвета	Соответствует
00004	Смесь-2 Н	0,96 мл x 1 пробирка	Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует
00004	ВК О	0,96 мл x 1 пробирка	Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует
00005	ОК	4,8 мл x 2 пробирки	Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует
00004	ПК1 HCV	4,8 мл x 2 пробирки	Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует
00004	ПК2 HCV	4,8 мл x 2 пробирки	Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует
–	Инструкция по применению	1 шт.	В бумажном виде и электронном виде по адресу: http://www.amplitech.ru/resources/	Соответствует
–	Краткое руководство	1 шт.	В бумажном виде	Соответствует
–	Паспорт	1 шт.	В электронном виде по адресу: http://www.amplitech.ru/quality/	Соответствует

Упаковка набора

Показатель	Норма	Результат контроля
Вид первичной и вторичной упаковки	Соответствует требованиям ТУ.	Соответствует
Отсутствие видимых дефектов	Отсутствие дефектов	Соответствует

Маркировка набора

Показатель	Норма	Результат контроля
Наличие информации на внутренней упаковке компонентов набора и внешней упаковке набора в соответствии с требованиями ТУ	Информация соответствует требованиям ТУ.	Соответствует

Функциональные характеристики набора

Показатель	Норма	Результат контроля
Предел обнаружения		
Выявление РНК HCV в концентрации 10 МЕ/мл при экстракции из 800 мкл образца	РНК HCV обнаружена.	Соответствует
Валидность результатов тестирования для исследуемых образцов	Последовательность ВК обнаружена.	Соответствует
Валидность результатов тестирования для контролей исследования (ОК, ПК1, ПК2)	Результаты соответствуют критериям оценки, указанным в инструкции по применению набора.	Соответствует

Показатель	Норма	Результат контроля
Предел измерения		
Количественное определение РНК HCV в концентрации ¹ 50 МЕ/мл при экстракции из 800 мкл образца	Полученное расчётное значение концентрации РНК HCV в диапазоне от 25 до 100 МЕ/мл.	Соответствует
Количественное определение РНК HCV в концентрации 50000 МЕ/мл при экстракции из 800 мкл образца	Полученное расчётное значение концентрации РНК HCV в диапазоне от 25000 до 100000 МЕ/мл.	Соответствует
Валидность результатов тестирования для исследуемых образцов	Последовательность ВК обнаружена.	Соответствует
Валидность результатов тестирования для контролей исследования (ОК, ПК1, ПК2)	Результаты соответствуют критериям оценки, указанным в инструкции по применению набора.	Соответствует

Заключение: Набор указанного лота соответствует требованиям ТУ 21.20.23-024-19926214-2023.

Дата выдачи паспорта: 06.04.2023

Руководитель ОКК, Романенкова Е.С.



¹ Нижняя граница диапазона измерения набора плюс 0,3 lg.

Пронумеровано, скреплено и прошито

лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«Амплитек»

А.В. Ходяков

