

mindray

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

Юсоев Сюн Вэй.

«27» декабря 2022 г.



**Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики
in vitro**

Набор реагентов для количественного определения специфических IgG к
Toxoplasma gondii (Toxoplasma gondii IgG) в клиническом образце человека
иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL

Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»

129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,

пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А.

Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39

ИНН 7705815069 КПП 770201001



Рисунок 1. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения специфических IgG к *Toxoplasma gondii* (*Toxoplasma gondii* IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 50 тестов (калибратор включен) (вид 1)

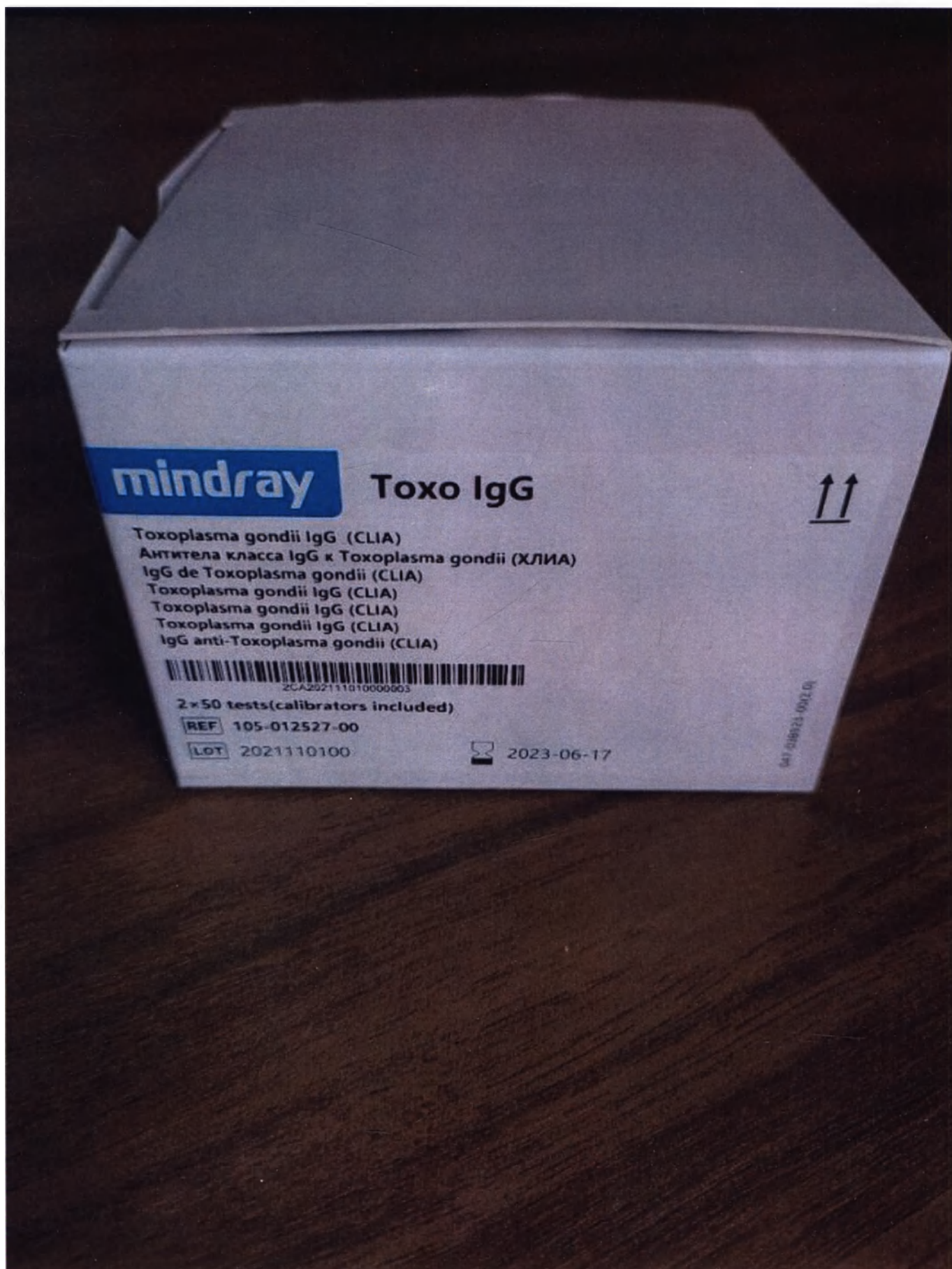


Рисунок 2. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения специфических IgG к *Toxoplasma gondii* (*Toxoplasma gondii* IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 50 тестов (калибратор включен) (вид 2)

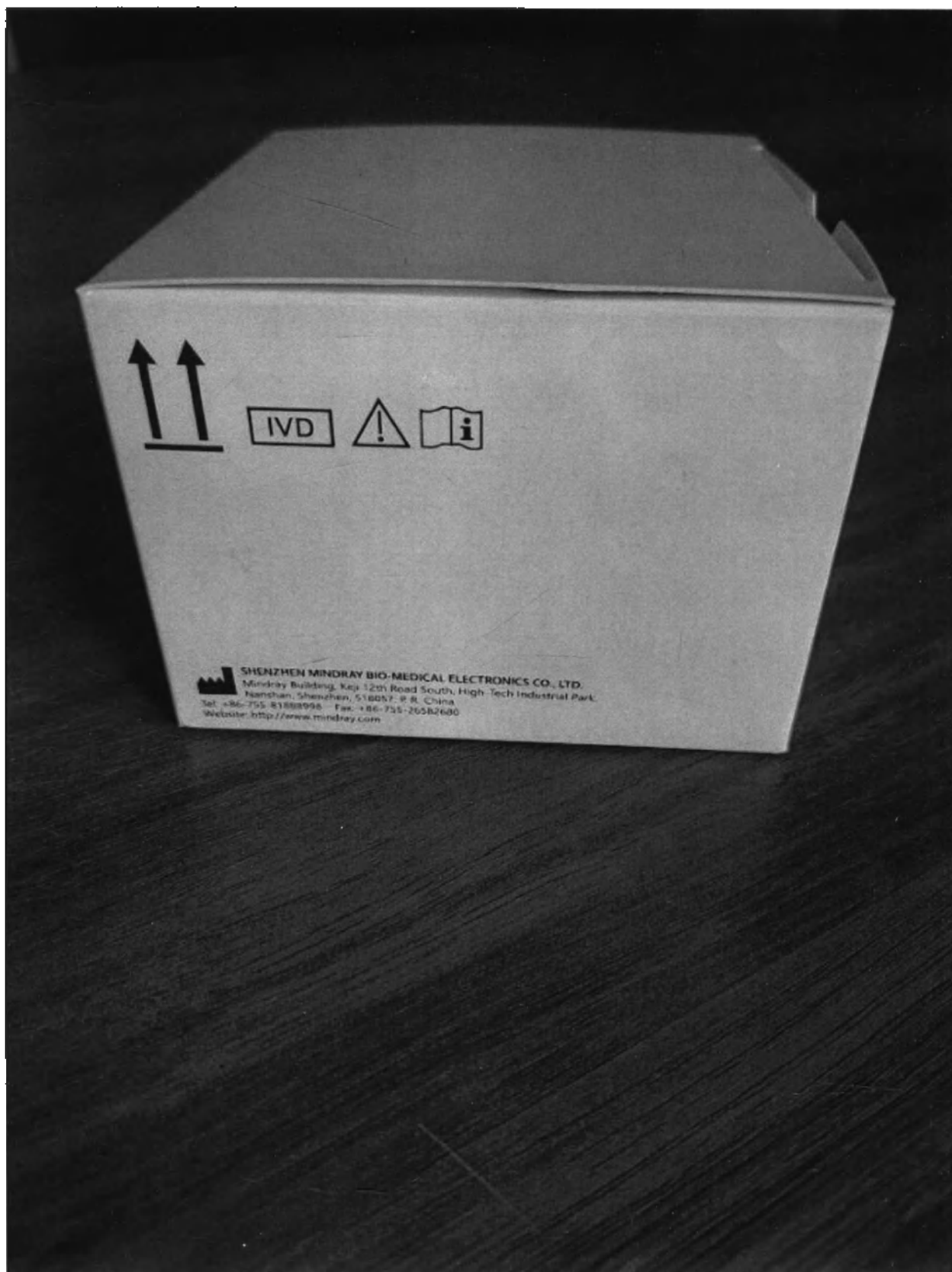


Рисунок 3. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения специфических IgG к *Toxoplasma gondii* (*Toxoplasma gondii* IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 50 тестов (калибратор включен) (вид 3)



Рисунок 4. Общий вид Набор реагентов для количественного определения специфических IgG к *Toxoplasma gondii* (*Toxoplasma gondii* IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 50 тестов (калибратор включен)



Рисунок 5. Кассета с реагентами - 2 шт (вид 1)



Рисунок 6. Кассета с реагентами - 2 шт (вид 2)

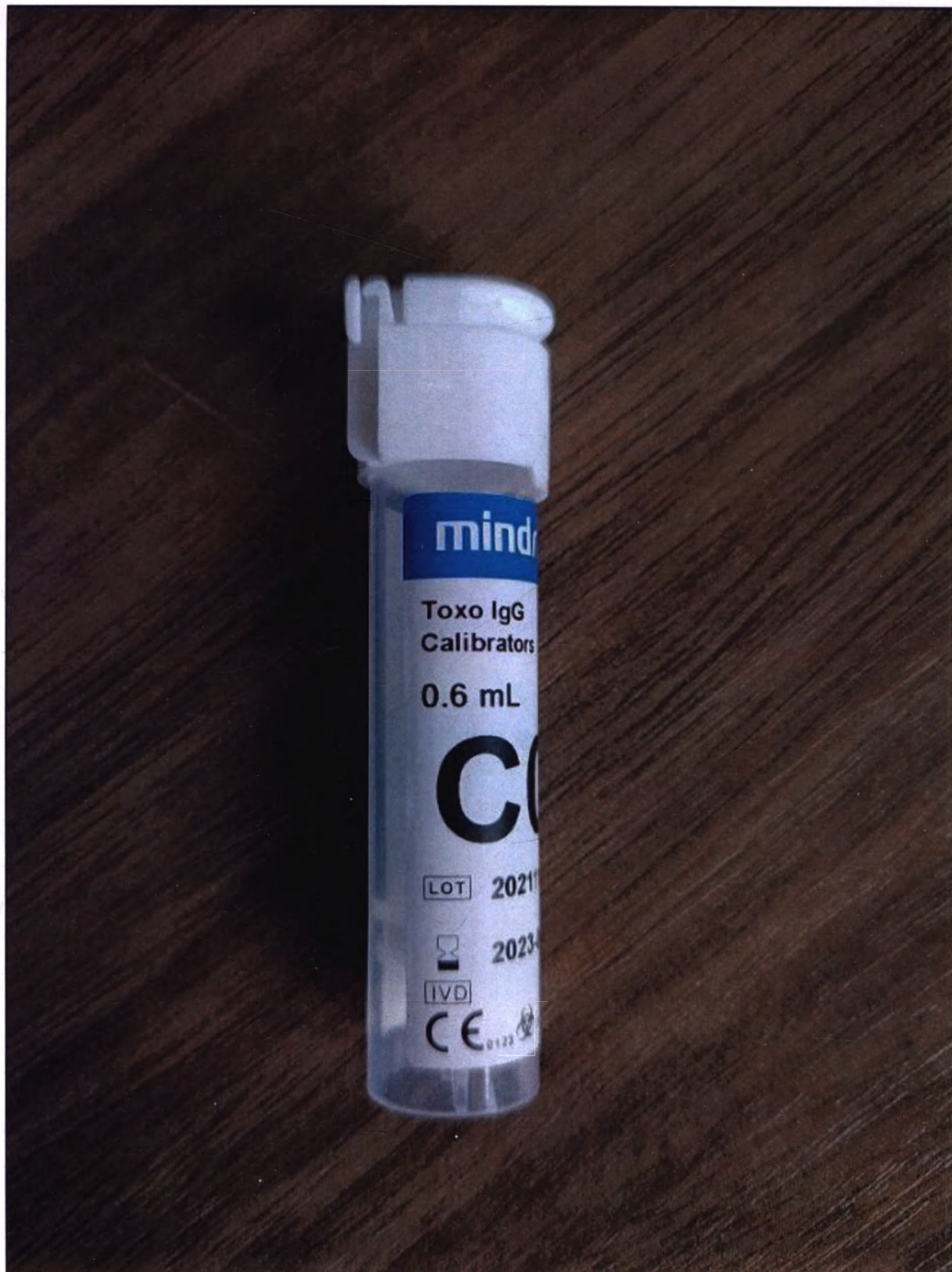


Рисунок 7. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт. (вид 1)



Рисунок 8. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт. (вид 2)



Рисунок 9. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 1)

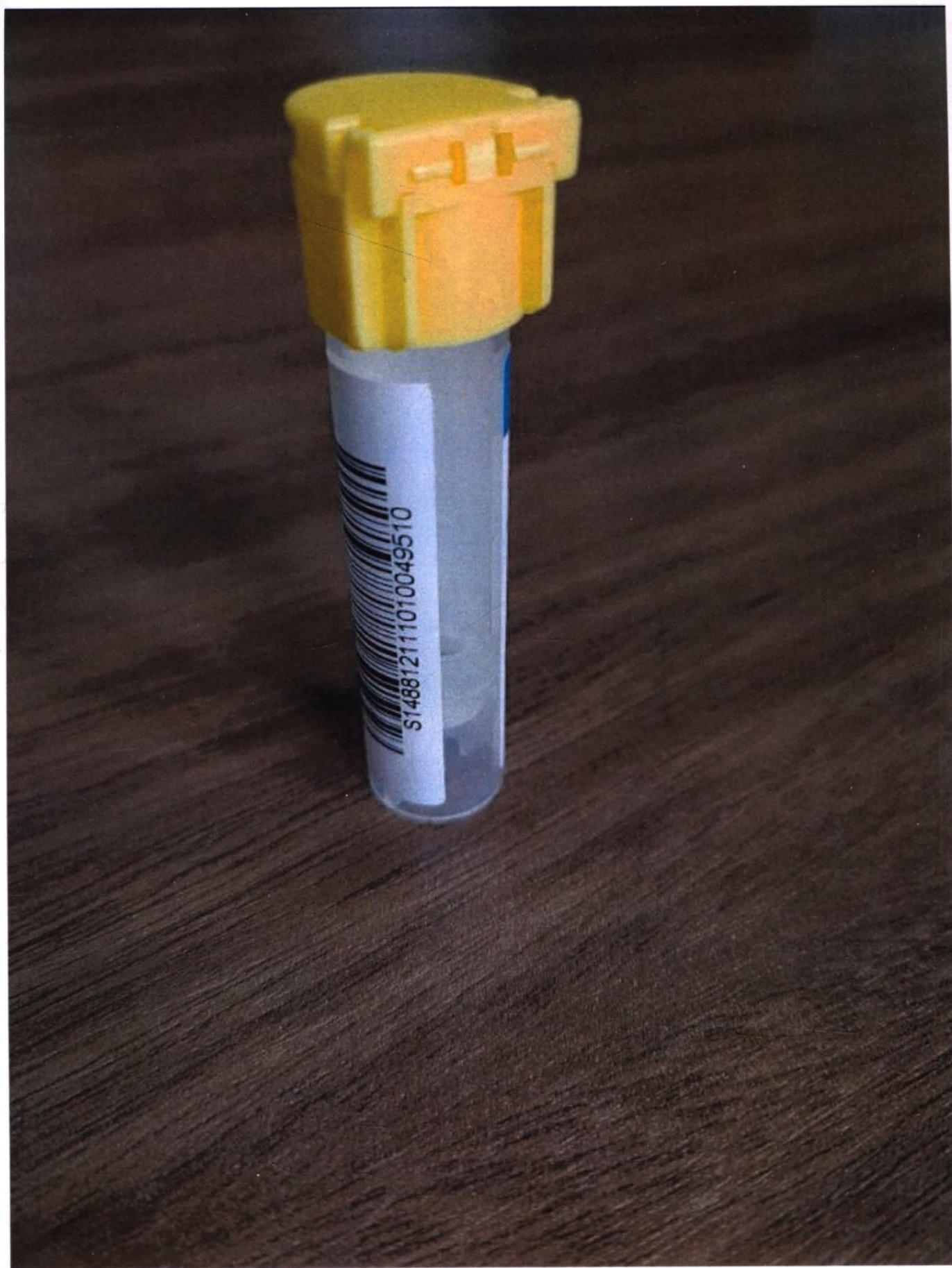


Рисунок 10. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 2)



Рисунок 11. Калибратор (C2), уровень 2 – 1 шт (вид 1)



Рисунок 12. Калибратор (C2), уровень 2 – 1 шт (вид 2)

mindray

Toxo IgG (CLIA)

Toxoplasma gondii IgG (CLIA)

Order Information

Catalog No.	Package Size
105-012524-00	2×50 tests (calibrators not included)
105-012525-00	2×100 tests (calibrators not included)
105-012527-00	2×50 tests (calibrators included)
105-012528-00	2×100 tests (calibrators included)

Intended Use

The CL-series Toxoplasma gondii IgG assay is a Chemiluminescent Immunoassay (CLIA) for the quantitative detection of Toxoplasma gondii specific IgG in human serum and plasma. The results of this assay can be used as an aid in the diagnosis of Toxoplasma gondii infection and in the assessment of immune status of individuals including pregnant women.

Summary

Toxoplasmosis is a world spread zoonotic infectious caused by Toxoplasma gondii. The infection can be transmitted through oral intake of food containing Toxoplasma gondii, direct contact with soil or water contaminated by oocysts, or vertical transmission of fetus through placenta^[1].

There are no obvious clinical symptoms and signs in healthy individuals infected with Toxoplasma gondii. However, in patients with immune deficiency or suppression, this parasite may invade various organs and lead to serious diseases, such as Toxoplasmosis encephalopathy, ophthalmopathy and liver damage.

If the infection occurs in pregnancy, Toxoplasma gondii can infect the fetus through placenta. In general, the later the pregnant period when pregnant women are infected, the higher the fetal infection rate, and the lighter clinical symptoms. In the first trimester, the fetal infection rate is 10-20%, which often causes spontaneous abortion. In the second trimester, the fetal infection rate increases and most of the fetuses suffer from stillbirth, premature delivery or severe damage of central nervous system. In the third trimester, the fetal infection rate

Рисунок 13. Инструкция по применению – 1 шт

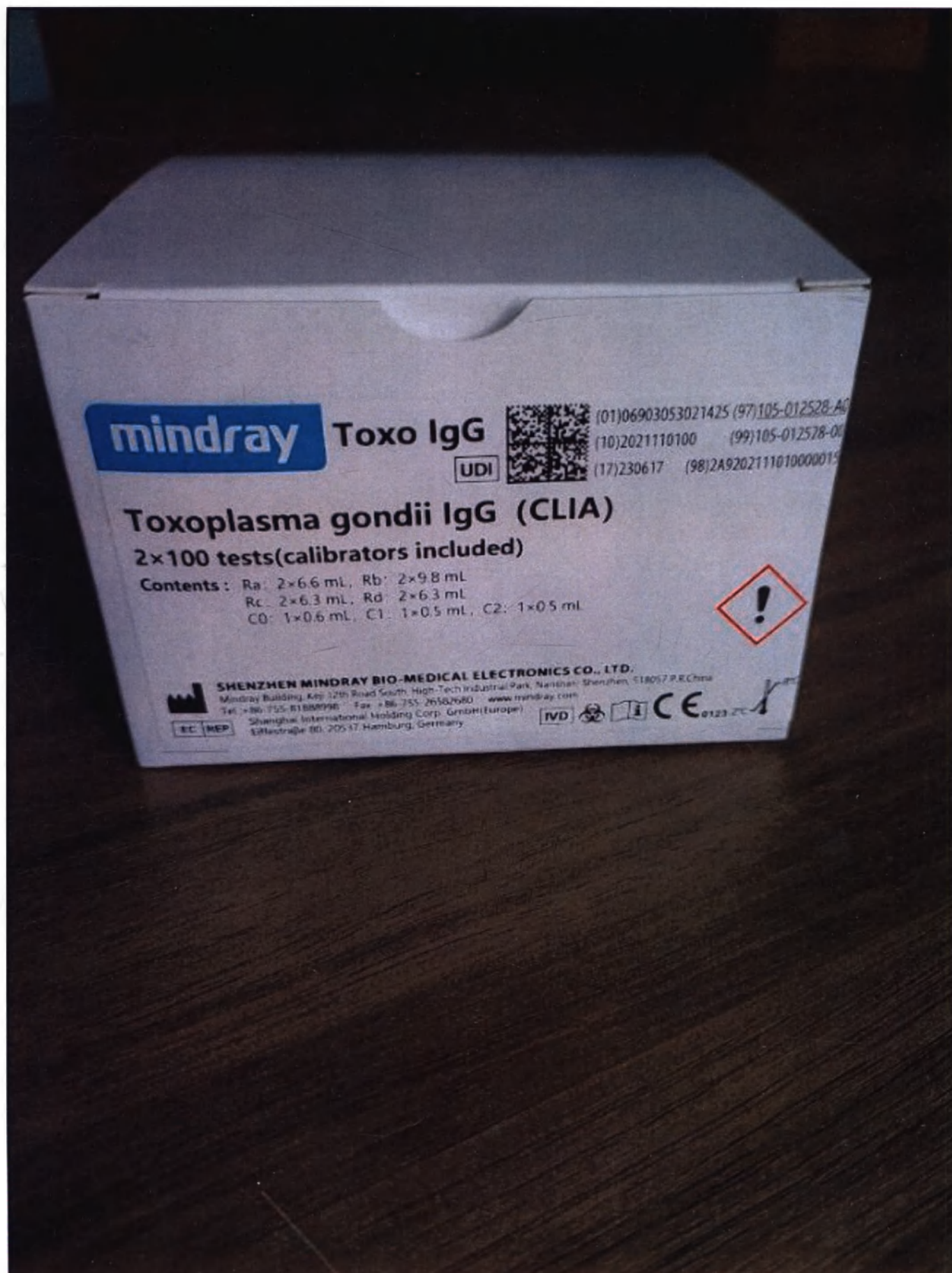


Рисунок 14 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения специфических IgG к *Toxoplasma gondii* (*Toxoplasma gondii* IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен) (вид 1)

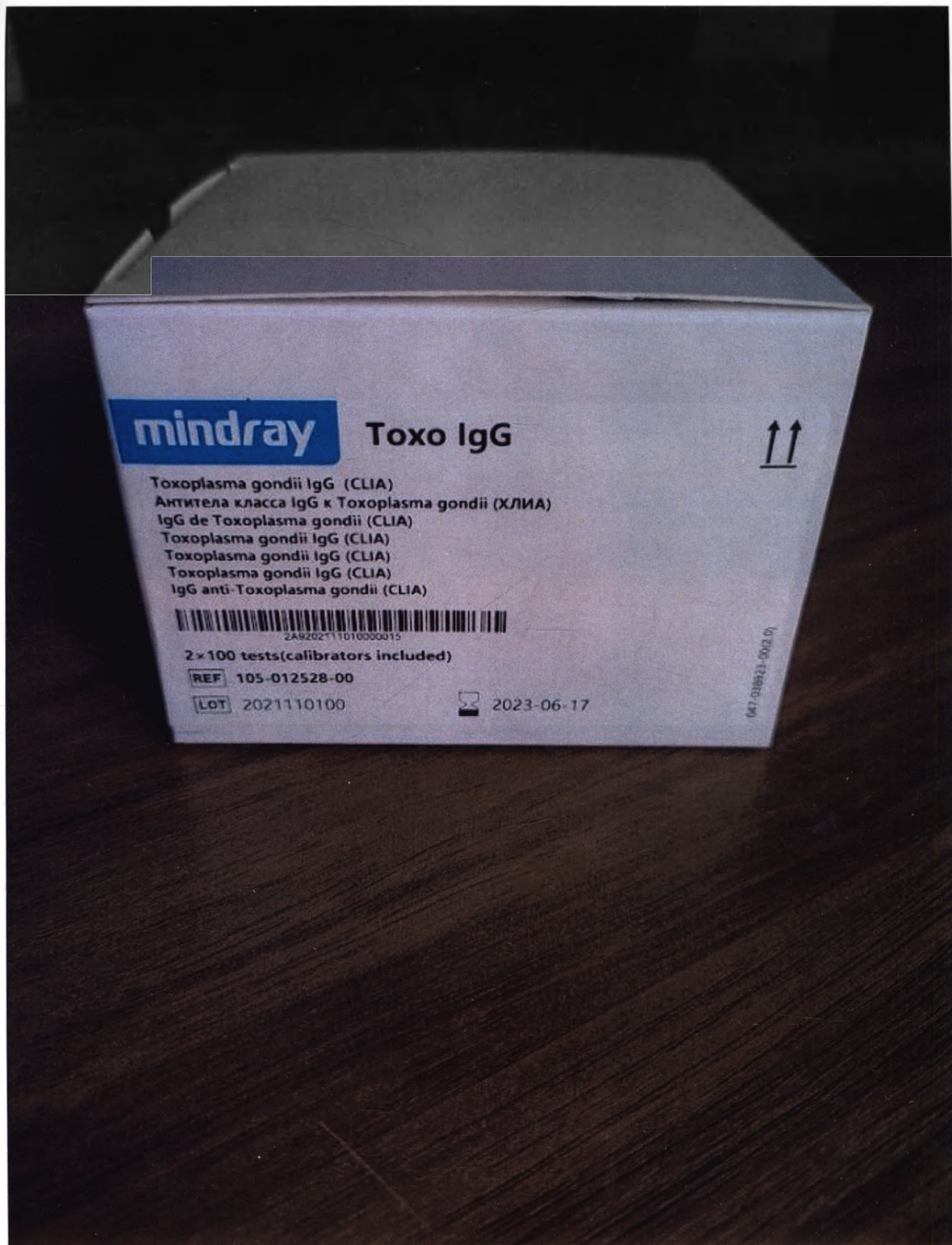


Рисунок 15. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения специфических IgG к *Toxoplasma gondii* (*Toxoplasma gondii* IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен) (вид 2)

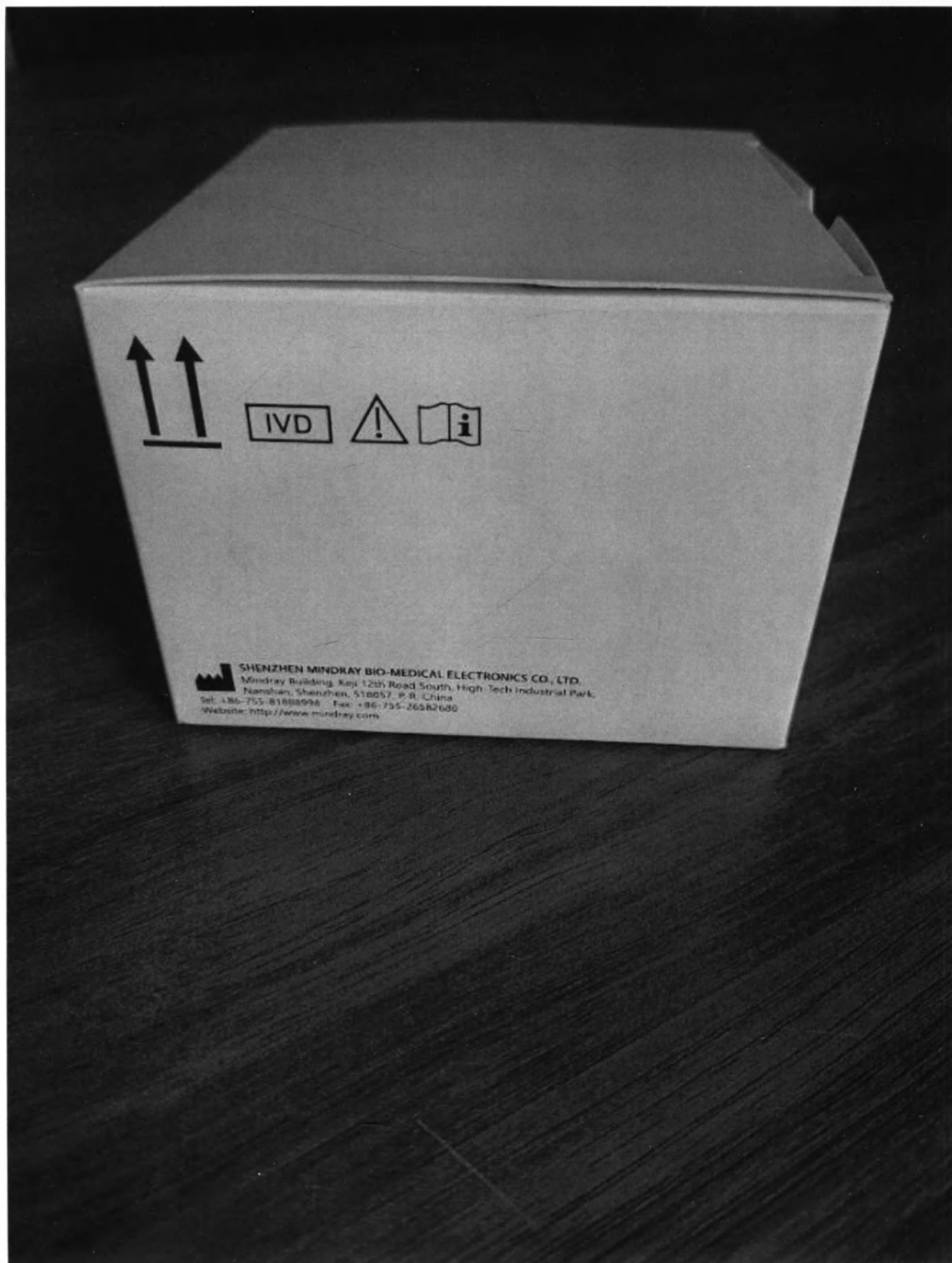


Рисунок 16. Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения специфических IgG к *Toxoplasma gondii* (*Toxoplasma gondii* IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен) (вид 3)

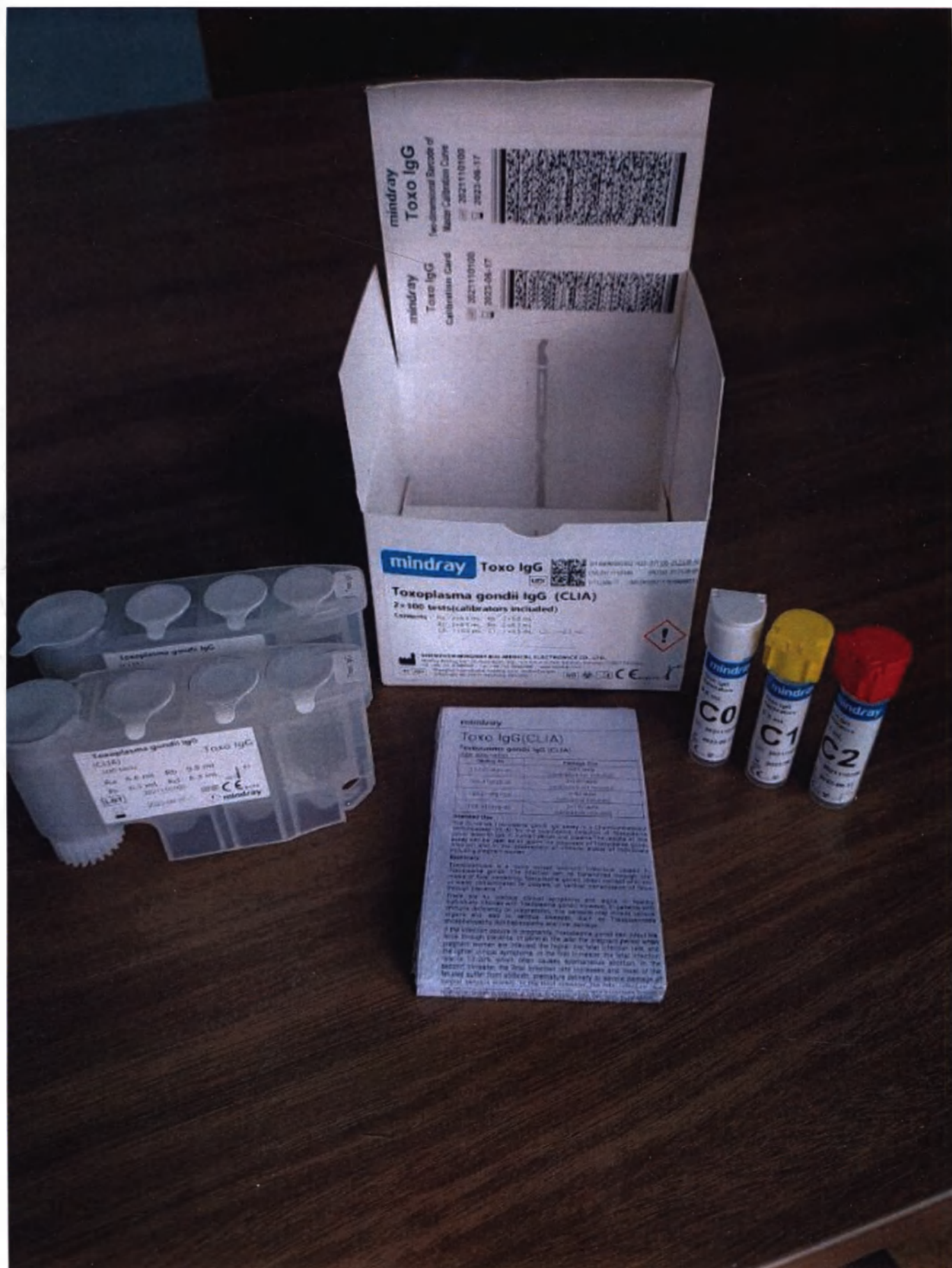


Рисунок 17. Общий вид Набор реагентов для количественного определения специфических IgG к *Toxoplasma gondii* (*Toxoplasma gondii* IgG) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2 x 100 тестов (калибратор включен)



Рисунок 18. Кассета с реагентами - 2 шт. (вид 1)



Рисунок 19. Кассета с реагентами - 2 шт. (вид 2)



Рисунок 20. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид 1)



Рисунок 21. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид 2)



Рисунок 22. Калибратор (C0), уровень 0 – 1 шт (вид 3)



Рисунок 23. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 1)



Рисунок 24. Калибратор (C1), уровень 1 – 1 шт (вид 2)



Рисунок 25. Калибратор (C2), уровень 2 – 1 шт (вид 1)



Рисунок 26. Калибратор (C2), уровень 2 – 1 шт (вид 2)

mindray

Toxo IgG(CLIA)

Toxoplasma gondii IgG (CLIA)

Order Information

Catalog No.	Package Size
105-012524-00	2×50 tests (calibrators not included)
105-012525-00	2×100 tests (calibrators not included)
105-012527-00	2×50 tests (calibrators included)
105-012528-00	2×100 tests (calibrators included)

Intended Use

The CL-series *Toxoplasma gondii* IgG assay is a Chemiluminescent Immunoassay (CLIA) for the quantitative detection of *Toxoplasma gondii* specific IgG in human serum and plasma. The results of this assay can be used as an aid in the diagnosis of *Toxoplasma gondii* infection and in the assessment of immune status of individuals including pregnant women.

Summary

Toxoplasmosis is a world spread zoonotic infectious caused by *Toxoplasma gondii*. The infection can be transmitted through oral intake of food containing *Toxoplasma gondii*, direct contact with soil or water contaminated by oocysts, or vertical transmission of fetus through placenta^[1].

There are no obvious clinical symptoms and signs in healthy individuals infected with *Toxoplasma gondii*. However, in patients with immune deficiency or suppression, this parasite may invade various organs and lead to serious diseases, such as Toxoplasmosis encephalopathy, ophthalmopathy and liver damage.

If the infection occurs in pregnancy, *Toxoplasma gondii* can infect the fetus through placenta. In general, the later the pregnant period when pregnant women are infected, the higher the fetal infection rate, and the lighter clinical symptoms. In the first trimester, the fetal infection rate is 10-20%, which often causes spontaneous abortion. In the second trimester, the fetal infection rate increases and most of the fetuses suffer from stillbirth, premature delivery or severe damage of central nervous system. In the third trimester, the fetal infection rate

Рисунок 27. Инструкция по применению – 1 шт

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

28 листа (ов)
Сосови

