

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛИСТОН»



УТВЕРЖДАЮ:


Директор ООО «Листон»

С.Н.Сапрыгин

10 января 2023 г.

Центрифуги лабораторные медицинские
Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203
по ТУ 9443-001-89699725 – 2021

Руководство по эксплуатации
ЦМ.012.000.000 РЭ

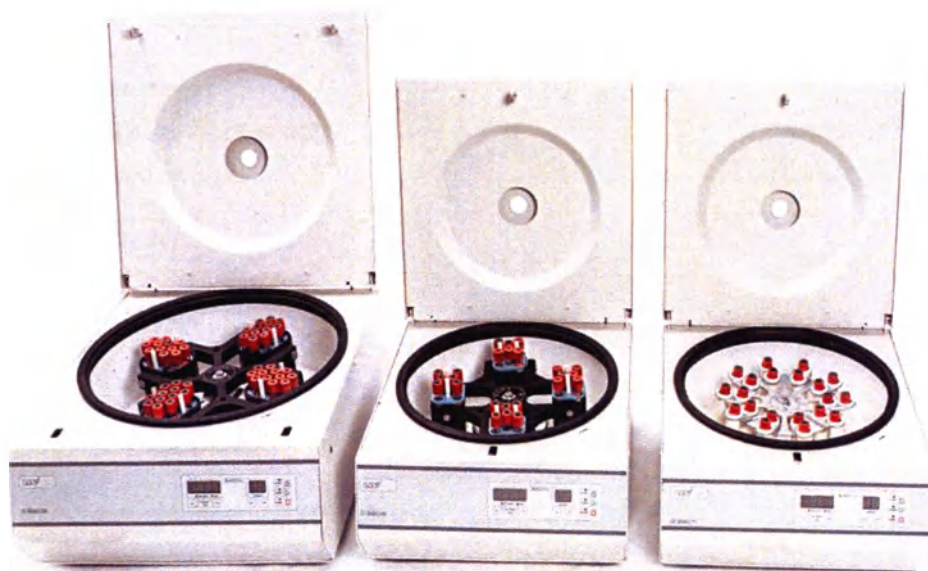

Калужская область
г. Жуков
2023 г.

Ив. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №

ДАННЫЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Тип и обозначение: Центрифуга лабораторная медицинская
Модель: Liston C 2201 Liston C 2202 Liston C 2203
Заводской номер: _____
Дата изготовления: _____
Комплектность
Ротор: _____
Бакеты: _____ шт.
Адаптеры: _____ шт.

Наименование изготовителя: ООО «Листон»
Адрес: 249191, Российская Федерация, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Сельхозтехника, д. 15
Телефон / факс: +7 (800) 350-40-41, +7 (484) 397-22-23
Сайт, e-mail: www.liston.ru, info@liston.ru

общие вопросы: _____
технические вопросы: _____
сервисный центр: _____

Центрифуга соответствует
 ТУ 9443-001-89699725 – 2021 и признана годной к эксплуатации

штамп ОТК

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ:

Регистрационное удостоверение:	
Выдано:	
Центрифуга соответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ ИЕС 61010-1-2014, ГОСТ ИЕС 61010-2-020-2013, ГОСТ Р МЭК 62304-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

Подпись и дата

Имя, №

Вым. кат. №

Подпись и дата

Имя, №

СОДЕРЖАНИЕ

1 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	4
2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	5
3 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	11
4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
5 КОМПЛЕКТНОСТЬ	23
6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	29
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	35
8 ХРАНЕНИЕ.....	36
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	36
10 УТИЛИЗАЦИЯ... ..	38
11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	38
12 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕПОЛАДКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	40
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ А</u> БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ КОДИРОВКА	
НАИМЕНОВАНИЙ РОТОРОВ, БАКЕТОВ И АДАПТЕРОВ	41
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ Б</u> СООТВЕТСТВИЕ БУКВЕННО-ЦИФРОВОЙ	
КОДИРОВКИ РОТОРОВ, БАКЕТОВ И АДАПТЕРОВ ОБОЗНАЧЕНИЮ	
СПЕЦИФИКАЦИЙ.....	43
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ В</u> МАКСИМАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРИФУГ	44
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ Г</u> МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЪЕМНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ И	
ВЕС ЗАГРУЗКИ РОТОРОВ И БАКЕТОВ	45
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ Д</u> МАКСИМАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
БАКЕТОВ И АДАПТЕРОВ.....	45
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ Е.</u> ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.</u> ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ.....	
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	50

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №	л.	Подпись и дата

					ЦМ.012.000.000 РЭ							
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Центрифуги лабораторные медицин- ские Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203 по ТУ 9443-001-89699725 – 2021 Руководство по эксплуатации			Литера	Лист	Листов		
Разраб.	Самсонов В.В.	0.01.23									3	50
Проверил	Самсонов В.В.	0.01.23										
Зав.НИЛ												
Н.контр.	Хелихова А.С.	0.01.23										
Утвердил	Самсонов В.В.	0.01.23						ООО «Листон»				

1 ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1.1 Использование данного Руководства по эксплуатации

1.1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации (в дальнейшем Руководство) распространяется на Центрифуги лабораторные медицинские Liston С 2201, Liston С 2202, Liston С 2203 по ТУ 9443-001-89699725 – 2021 (далее по тексту- Центрифуга).

1.1.2 Перед первым вводом в эксплуатацию или перед использованием Центрифуги внимательно и полностью прочитайте настоящее Руководство и точно следуйте его указаниям, ознакомьтесь с принципом работы устройства. Соблюдайте инструкции по использованию принадлежностей.

1.1.3 Руководство содержит всю необходимую информацию по транспортированию, установке, использованию в соответствии с назначением, технике безопасности и мерах предосторожности при работе и техническом обслуживании Центрифуги.

Руководство является частью прибора и должно рассматриваться как неотъемлемая часть Центрифуги и должно быть всегда доступно и находиться в распоряжении персонала лаборатории. Его следует хранить в легкодоступном месте.

При передаче прибора третьим лицам следует приложить к нему руководство по эксплуатации.

Помните, что нарушение правил эксплуатации и проведения работ может привести к лишению права на бесплатный гарантийный ремонт!

1.1.4 Руководство выполнено в соответствии с ГОСТ Р 2.610-2019, ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ IEC 82079-1-2014, ГОСТ Р 56018-2014/ISO/IEC Guide 37:2012, ГОСТ Р 54329-2011, ГОСТ Р 2.105-2019. Термины и определения – по ГОСТ Р МЭК/ТО 60788-2009, ГОСТ 31508-2012, ГОСТ Р 52002-2003, ГОСТ 18322-2016, ГОСТ 27.002-2015, ГОСТ 25866-83, ГОСТ 33647-2015, ГОСТ Р 50267.0-92 и ГОСТ Р 2.610-2019.

1.1.5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению технических характеристик, товарного вида и удобства использования Центрифуги.

Ваши замечания по улучшению конструкции и удобству эксплуатации просим присылать на указанный выше адрес предприятия-изготовителя.

1.2 Символы предостерегающие и предупреждающие об опасности



1.2.1 **ВНИМАНИЕ!** Предупреждение о потенциальном риске и нанесении ущерба здоровью. Прочтите данный пункт очень тщательно и неукоснительно его выполняйте, он связан с вашей безопасностью!



1.2.2 **ОПАСНОСТЬ!** Риск удара током и серьезного ущерба здоровью и возможной угрозы жизни.



1.2.3 **ОПАСНОСТЬ!** Биологическая опасность с потенциальным риском для здоровья и, как следствие, возможной угрозы жизни.

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

4



1.2.4 **ОПАСНОСТЬ!** Риск взрывоопасности с потенциальным риском для здоровья и, как следствие, возможной угрозы жизни



2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



2.1 Требования к помещению, рабочему месту и квалификации пользователя:

2.1.1 Обеспечьте нормальные условия окружающей среды для эксплуатации Центрифуги:

- закрытое лабораторное помещение, инкубатор или холодную комнату, с хорошей естественной вентиляцией или в зоне работы вытяжки;
- работу на высоте до 2000 метров над уровнем моря;
- температуру воздуха от 10°C до 35°C,
- максимальную относительную влажность воздуха 80% для температуры до 31°C, с линейным уменьшением относительной влажности до 50% при увеличении температуры до 40°C, без образования конденсата.

2.1.2 Не используйте Центрифугу вне помещений.

2.1.3 **Проверьте с помощью специалистов надежность контура заземления оборудования лаборатории для исключения опасности электротравм.**

2.1.4 Обеспечьте прочный рабочий стол с прямой поверхностью.

2.1.5 Не располагайте центрифугу около радиатора и в месте попадания солнечных лучей.

2.1.6 Не используйте Центрифугу в непосредственной близости от другого оборудования и не устанавливайте в несколько уровней с другим оборудованием в связи с риском возникновения электромагнитных помех.

2.1.7 **Обеспечьте (в соответствии с ГОСТ IEC 61010-2-020) ЗАЗОР РАБОЧЕЙ ЗОНЫ со всех сторон Центрифуги не менее 300 мм.**

Примечание: ЗАЗОР РАБОЧЕЙ ЗОНЫ (CLEARANCE ENVELOPE)-пространство вокруг Центрифуги, необходимое для обеспечения безопасности.

2.1.8 **Проведите специальные мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц в рабочую зону Центрифуги во время ее работы.**

2.1.9 Обеспечьте безопасную эксплуатацию и обслуживание Центрифуги только специально обученным квалифицированным персоналом, изучившим данное Руководство, имеющим опыт в эксплуатации медицинского лабораторного оборудования, прошедшим инструктаж по технике безопасности и освоившим управление Центрифугой. Не доверяйте производство работ случайным людям, избегайте самостоятельных неквалифицированных действий!

2.1.10 Обеспечиваемая оборудованием защита может оказаться неэффективной, если эксплуатация прибора не соответствует требованиям изготовителя.



2.2 Условия и ограничения при применении Центрифуги по назначению

2.2.1 Используйте Центрифугу только в соответствии с Руководством по эксплуатации и только по назначению.

2.2.1 Включайте Центрифугу только в том случае, если сам прибор и сетевой кабель исправны.

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2.2.2 Выдержите Центрифугу при комнатной температуре в течение 2-3 часов после транспортировки или хранения на складе, перед подключением к электрической сети. Перемена места расположения Центрифуги с холодного на теплое приведет к конденсации воды в центрифуге. Важно дать время для просушки Центрифуги перед повторением процедуры.

2.2.3 Оберегайте Центрифугу от ударов и падений. Не используйте Центрифугу и ее составные части в случае падений или видимых повреждений, а также в случае других неисправностей.

2.2.4 Не находитесь внутри зазора рабочей зоны, дольше чем необходимо по рабочим причинам.

2.2.5 Не оставляйте работающую Центрифугу без присмотра.

2.2.6 Не перемещайте и не подталкивайте Центрифугу во время работы. При ударе ротора о стенку камеры сильно повреждается устройство и сам ротор.

2.2.7 Не прислоняйтесь к Центрифуге во время ее работы.

2.2.8 Не храните потенциально опасные материалы в пределах зазора рабочей зоны.

2.2.9 Не используйте Центрифугу в агрессивной или взрывоопасной среде. Центрифуга не является ни инертной, ни взрывозащищенной.

2.2.10 Не проводите самостоятельных модификаций Центрифуги.

2.2.11 Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары, приобретенные у производителя или его официального представителя.

2.2.12 Осуществляйте транспортировку и хранение Центрифуги только в горизонтальном положении согласно маркировке на коробке.

2.2.13 **Выключите или прервите электроснабжение Центрифуги и немедленно покиньте зону ее расположения при возникновении любой опасной ситуации.**



2.3 **Меры безопасности по электромагнитной совместимости**

2.3.1 Не устанавливайте Центрифугу вблизи источников сильного электромагнитного излучения, так как они могут нарушить ее нормальное функционирование.

2.3.2 Не используйте Центрифугу при наличии вблизи неё синтетических материалов (синтетической одежды, покрытий и т.п.) при низкой относительной влажности воздуха. Это может привести к сбоям в работе из-за влияния электростатических разрядов.

2.3.3 **Требования электромагнитной совместимости**

2.3.3.1 Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 «Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования».

2.3.3.2 Изделие предназначено для использования в базовой электромагнитной обстановке (обстановка, существующая в местах с электроснабжением непосредственно от распределительной сети низкого напряжения до 1000 В).

2.3.3.3 Требования помехоустойчивости оборудования, предназначенного для использования в базовой электромагнитной обстановке, перечислены в таблице 1:

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Дата

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

6

Таблица 1

Порт	Наименование электромагнитной помехи	Стандарт ЭМС	Значение параметра испытаний	Критерий качества функционирования
Порт корпуса	Электростатический разряд	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 30804.4.2-2013	4 кВ (контактный разряд) 8 кВ (воздушный разряд)	В В
	Электромагнитное поле	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 30804.4.3-2013	10 В/м (от 80 МГц до 1000 МГц) 3 В/м (от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц) 1 В/м (от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц)	А А А
	Электромагнитное поле промышленной частоты	ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 61000-4-8-93)	30 А/м (50 Гц)	А
Порт электропитания переменного тока (включая порты защитного заземления)	Провалы напряжения	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 30804.4.11-2013	0% (1 период) 40% (10 периодов) 70% (25 периодов)	В В С
	Кратковременные прерывания напряжения электропитания	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 30804.4.11-2013	0% (250 периодов)	С
	Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 30804.4.4-2013	2 кВ (5/50нс, 5 КГц)	В
	Микросекундные импульсы большой энергии	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 51317.4.5-99	1,0 кВ (линия-линия) 2,0 кВ (линия земля)	В
	Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными полями	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 51317.4.6-99	3 В (от 0,15 МГц до 80 МГц)	А

Подпись и дата

Инв.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

7

2.3.3.4 Спецификация критериев качества функционирования:

Таблица 2

Критерий качества функционирования	Описание критерия качества функционирования
А	Оборудование должно продолжать функционировать в соответствии с назначением во время и после проведения испытания. Не допускается ухудшение характеристик функционирования или потеря функций ниже уровня качества функционирования, предусмотренного в технической документации изготовителя на оборудование, при использовании оборудования по назначению.
В	Оборудование должно продолжать функционировать в соответствии с назначением после проведения испытания. Не допускается ухудшение характеристик функционирования или потеря функций ниже уровня качества функционирования, предусмотренного в технической документации изготовителя на оборудование, при использовании оборудования по назначению. Во время проведения испытания допускаются незначительное ухудшение характеристик функционирования оборудования. Не допускается изменение фактического рабочего состояния или сохраненных данных.
С	Допускается временная потеря функций при условии, что функция может восстановиться самостоятельно или при работе средств управления.

2.3.3.5 Требования к электромагнитной эмиссии:

Изделие соответствует требованиям СИСПр 11 для оборудования класса А. группы 1;

Изделие соответствует требованиям МЭК 61000-3-2 для изделий класса А;

Изделие соответствует требованиям МЭК 61000-3-3.



2.4 Источники риска при использовании Центрифуги по назначению



2.4.1 Опасность неправильного применения

2.4.1.1 Не включайте Центрифугу с установленными транспортировочными винтами, это может привести к ее повреждению.

2.4.1.2 Не производите включение и выключение электропитания Центрифуги несколько раз подряд. Это может вызвать повреждение электроники прибора.

2.4.1.3 Не эксплуатируйте роторы, бакеты или адаптеры с видимыми следами коррозии или механических повреждений. Проверяйте регулярно их состояние.

2.4.1.4 Убедитесь, перед началом работы, что ротор надежно закреплен на валу гайкой крепления. Затяните, при необходимости, гайку ключом. Если при запуске центрифуги появляются необычные шумы, это означает, что ротор или его крышка закреплены неправильно. Немедленно остановите центрифугу.

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

8

2.4.1.5 Загружайте роторы симметрично, используя одинаковые пробирки. Загружайте адаптеры только подходящими пробирками. Всегда используйте пробирки одинакового типа (вес, материал, плотность и объем). Проверяйте симметричность загрузки путем уравнивания используемых адаптеров и пробирок с помощью весов.

2.4.1.6 Не загружайте ротор центрифугируемым материалом свыше величин, промаркированных на роторе и/или бакете. С максимальным числом оборотов, объемом наполнения и загрузкой центрифуга рассчитана на центрифугирование проб с плотностью максимум 1,2 г/см³. Убедитесь, что плотность центрифугируемого материала не превышает указанную величину.

2.4.1.7 Не используйте пробирки, не предназначенные для центрифугирования. Используйте только те пробирки, которые по информации производителя подходят для требуемых значений ускорения g (ОЦУ).

2.4.1.8 Не наполняйте пробирки после их установки в ротор.

2.4.1.9 Убедитесь, в случае использования пробирок с закручивающимися крышками, что крышки тщательно закручены. Неплотно закрученные крышки в процессе центрифугирования могут быть сорваны.



2.4.2 Опасность поражения электрическим током:

2.4.2.1 Подключайте Центрифугу только к электрической сети, напряжение и частота которой соответствуют указанным на шильдике (табличке с серийным номером на задней стенке Центрифуги). Используйте только сетевой кабель из комплекта поставки.

2.4.2.2 Не подключайте Центрифугу к электрической сети без заземления, а также не используйте удлинитель без заземления.

2.4.2.3 Убедитесь, что корпус центрифуги закрыт и не имеет повреждений. Открывать корпус разрешается только авторизованной сервисной службе. При открытом корпусе возможно прикосновение к деталям, находящимся под высоким напряжением, что может привести к поражению электрическим током. Удар электрическим током приводит к травме сердца и параличу дыхания.

2.4.2.4 Отключите Центрифугу от электрической сети при необходимости перемещения прибора. Для отключения Центрифуги от сети, выключите прибор и отсоедините контактную вилку сетевого кабеля прибора от сетевой розетки.

2.4.2.5 Не допускайте попадания любой жидкости внутрь Центрифуги (включая отверстия для кронштейнов электрозамка). В случае попадания жидкости, отключите Центрифугу от сети и не включайте до прихода специалиста по обслуживанию и ремонту. Уберите все осколки стеклянной или пластиковой пробирки из камеры, если пролив жидкости произошел из-за разрушения пробирки. Тщательно очистите прибор и принадлежности в соответствии с указаниями по очистке и дезинфекции, приведенными в данном Руководстве.

2.4.2.6 Убедитесь, что сетевой выключатель или розетка легко доступны во время эксплуатации Центрифуги.



2.4.3 Опасность травмирования вращающимся ротором

2.4.3.1 Дождитесь полной остановки ротора перед аварийным разблокированием крышки Центрифуги. При аварийной остановке ротор может вращаться еще несколько минут.

2.4.3.2 Используйте для проверки смотровое окно в крышке Центрифуги.

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2.4.3.3 Не используйте аварийную разблокировку крышки без надобности. Используйте только в крайнем случае, например, при прекращении подачи электроэнергии, для извлечения проб из Центрифуги.



2.4.4 Опасность травмирования при химическом, термическом или механическом повреждении используемых принадлежностей.

2.4.4.1 Проверяйте перед каждым использованием принадлежности на наличие повреждений. Даже небольшие царапины и трещины могут привести к сильным внутренним повреждениям материала, разрушению принадлежностей при центрифугировании и повреждении самой Центрифуги.

2.4.4.2 Защищайте все детали принадлежностей от механических повреждений. Заменяйте поврежденные принадлежности. Не используйте принадлежности, если их максимальный срок службы уже превышен.

2.4.4.3 Не используйте поврежденные пробирки. Убедитесь в отсутствии их повреждений перед центрифугированием. В противном случае возможны повреждения Центрифуги и ее принадлежностей, а также потеря проб.

2.4.4.4 Учитывайте информацию производителя, касающуюся химической устойчивости пробирок. При использовании органических растворителей (например, фенола или хлороформа) снижается прочность пластиковых пробирок, в результате чего возможно их повреждение.

2.4.4.5 Учитывайте снижение устойчивости пробирок к центрифугированию. Пробирки нагреваются. В центрифугах без охлаждения, в зависимости от продолжительности работы, ускорения g (ОЦУ) / числа оборотов и температуры окружающей среды, камера ротора, сам ротор и проба могут нагреться до 40 °C и выше. Учитывайте термостойкость проб.



2.4.5 Опасность травмирования при открывании и закрывании крышки.

2.4.5.1 Не беритесь рукой за участок между крышкой Центрифуги и ее корпусом при открывании или закрывании крышки.

2.4.5.2 Открывайте крышку Центрифуги полностью, чтобы зафиксировать крышку от закрывания.

2.4.5.3 Не беритесь рукой за блокирующий механизм крышки центрифуги.



2.4.6 Опасность при центрифугировании материалов из группы повышенного риска.

2.4.6.1 Не центрифугируйте взрывоопасные и горючие материалы и материалы с бурной химической реакцией. Не применяйте Центрифугу во взрывоопасном окружении.

2.4.6.2 Не используйте агрессивные вещества, например сильные и слабые щелочи, сильные кислоты, растворы с ионами ртути, меди и других тяжелых металлов, галогенированные углеводороды, концентрированные солевые растворы и фенол. Роторы представляют собой высококачественные конструктивные элементы, выдерживающие экстремальные нагрузки. Эту устойчивость могут снизить агрессивные вещества.

2.4.6.3 Не центрифугируйте токсичные или радиоактивные материалы без соответствующих систем безопасности. Предусматривайте несколько мер безопасности. Пользователь несет

Подпись и дата

Инв. J

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ответственность за обезвреживание опасных материалов, пролитых на прибор или попавших внутрь прибора.



2.4.7 Опасность взрыва

2.4.7.1 Не эксплуатируйте Центрифугу в помещениях, где проводится работа со взрывоопасными веществами.

2.4.7.2 Не используйте Центрифугу для работы со взрывоопасными или высокоактивными химическими реагентами.

2.4.7.3 Не используйте Центрифугу для работы с веществами, которые могут создать взрывоопасную атмосферу. Окончательное решение в отношении рисков, связанных с использованием таких веществ, принимает пользователь.



2.4.8 Опасность при центрифугировании микробиологических проб

2.4.8.1 Придерживайтесь стандартных рабочих процедур, установленных в лаборатории, при работе с биологическими материалами. Соблюдайте общие меры предосторожности при работе с центрифугой.

2.4.8.2 Соблюдайте правила надлежащей лабораторной практики, а также лабораторные процедуры, регламентирующие использование индивидуальных средств защиты (лабораторных халатов, перчаток и средств защиты глаз).

Все поверхности прибора должны считаться потенциально биологически опасными, а работа с ними должна выполняться с осторожностью согласно стандартным рабочим процедурам, установленным в лаборатории.

2.4.8.3 Применяйте аэрозоленепроницаемые биологические уплотнители крышек при центрифугировании микробиологических проб группы риска II (согласно ГОСТ IEC 61010-2-020). Без уплотнителя крышки Центрифуга не является биологически безопасной системой.

2.4.8.4 Проведите комплекс дезинфекционных мероприятий при попадании токсинов или патогенных субстанций в Центрифугу или ее компоненты.

3 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Центрифуга предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 1,2 г/см³ в поле центробежных сил и применяется в практике клинической лабораторной диагностики, в лабораториях поликлиник, больниц.

3.2 Центрифуга обеспечивает возможность центрифугирования жидких систем, с неуравновешенностью масс в пробирках до 2,0 г.

3.3 Центрифуга представляет собой медицинское неинвазивное изделие длительного применения, полной заводской готовности, включающее в себя все необходимые для обеспечения надёжного функционирования устройства контроля и управления.

3.4 Классификация Центрифуги:

а) по коду ОКПД 2 – 28.29.41.110;

б) по виду медицинского изделия, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 260430 «Центрифуга общего назначения ИВД»;

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № посл.

в) в зависимости от потенциального риска применения – класс 2а (согласно Номенклатурной классификации МИ, утвержденной Приказом Минздрава России от 06.06.2012 г. № 4н) и по ГОСТ 31508;

г) по воспринимаемым механическим воздействиям – группа 2 по ГОСТ Р 50444;

д) при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

е) по электромагнитной совместимости – соответствует ГОСТ Р МЭК 61326-1;

ж) по уровню промышленных радиопомех – не превышают значений, устанавливаемых ГОСТ Р 51318.11.

з) по типу размещения – настольная, закрытая;

к) по режиму работы – автоматическая, повторно-продолжительного действия;

3.5 Пример записи Центрифуги при заказе и в другой документации: «Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2201 ТУ 9443-001-89699725-2021».

4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Центрифуга соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ ИЕС 61010-1-2014; ГОСТ ИЕС 61010-2-020-2013; ГОСТ Р МЭК 62304-2013; ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ТУ 9443-001-89699725-2021.

4.2 Центрифуга изготовлена и проверена в соответствии с комплектом конструкторской документации:

Liston C 2201 – по ЦМ.012.000.000;

Liston C 2202 – по ЦМ.014.000.000;

Liston C 2203 – по ЦМ.013.000.000.

4.3 Центрифуга оснащена программным обеспечением по ГОСТ Р МЭК 62304-2013, ГОСТ Р 55544-2013 и ГОСТ ISO 14971-2011, выполняющим функции:

- реализации и контроля заданных режимов работы;
- отображения состояния и параметров работы;
- выполнения заданных алгоритмов;
- оперативного управления;
- регистрации аварийных событий;

4.4 Основные технические характеристики Центрифуги приведены в Таблице 3:

Таблица 3

	Центрифуги		
	Liston C 2201	Liston C 2202	Liston C 2203
Наименование параметра	Значения		
Внешний вид, качество сборки	В соответствии с рабочими чертежами, наличие дефектов не допускается		
Номинальное напряжение питающей однофазной сети, В	230		
- с допустимым отклонением, В	±23		
Частота переменного тока питающей сети, Гц	50		
- с допустимым отклонением, Гц	± 0,5		

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

12

Токи в установившемся режиме, потребляемые центрифугой, А, не более	1,6	2,3	2,9
Полная (кажущаяся) мощность в установившемся режиме, В·А, не более	405	590	730
Диапазон установки и отображение текущей частоты вращения ротора, об/мин, с дискретностью, об/мин	от 100 до 3 600 50	от 100 до 4000 50	от 100 до 3 500 50
Предел допускаемого отклонения частоты вращения ротора от заданного значения, об/мин., не более	± 50		
Диапазон установки и отображения текущего относительного центробежного ускорения ротора в единицах ОЦУ с дискретностью, ед. при значениях ОЦУ от 10 до 100; при значениях ОЦУ от 100 до 500; при значениях ОЦУ от 500 до 2000; при значениях ОЦУ свыше 2000	от 10g до 2 500g 10 25 50 100	от 10g до 3 000g 10 25 50 100	от 10g до 2 500g 10 25 50 100
Предел допускаемого отклонения центробежного ускорения, ед., не более - при значениях ОЦУ от 10 до 100; - при значениях ОЦУ от 100 до 500; - при значениях ОЦУ от 500 до 2000; - при значениях ОЦУ свыше 2000	± 10 ± 25 ± 50 ± 100	± 10 ± 25 ± 50 ± 100	± 10 ± 25 ± 50 ± 100
Время непрерывной работы, мин. - с последующим перерывом, мин не менее Режим эксплуатации общий. Периоды действия и ожидания чередуются случайным образом.	180 60		
Время выхода на рабочий режим после включения (достижения установившегося режима), мин., не более	2		
Обеспечиваемая установка и отображение интервала времени центрифугирования, мин. - с дискретностью, мин*	1-99 1		
Пределы допускаемого отклонения от заданного значения интервала времени, %, не более	±1		
Длительность сигнала, с - предупреждающего; - аварийного; - для снятия аварийного режима	~0,3 ~1,0 ~1,5		
Корректированный уровень звуковой мощности при измерительном расстоянии 1 метр, дБ·А, не более	60		

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

13

Корректированный уровень звуковой мощности однократного короткого (предупреждение), однократного длинного (авария, ошибка) и трехкратного (окончание процесса) звукового сигнала при измерительном расстоянии 1 метр, дБ · А, не менее,	70		
Средний срок службы Центрифуги, лет, не менее	5		
Время остановки ротора при плавном торможении секунд, не более	40		
Время аварийного торможения ротора, секунд, не более	25	25	30
Допустимая температура окружающей среды, °С	от +10 до +35		
Масса конструкционная, кг, **	20,0±1,0	21,5±1,0	48,5±1,5
Габаритные размеры (ширина × глубина × высота), мм,	(418±5)×(485±5)×(257±5)	(418±5)×(485±5)×(257±5)	(482±5)×(565±5)×(288±5)

Примечания:

1 *Последняя минута текущего интервала времени, оставшаяся до торможения ротора, должна отображаться в секундах

2 **Без роторов и принадлежностей

3 Изготовитель оставляет за собой право изменения и уточнения, приведенных в таблице 3 характеристик, в соответствии с требованиями конструкторской документации на конкретную модификацию Центрифуги.

4.5 Центрифуга обеспечивает установку и отображение текущей частоты вращения ротора в оборотах в минуту на цифровом 4-х разрядном индикаторе ОБ/МИН на лицевой панели с дискретностью установки и отображения 50 об/мин:

- для Центрифуги Liston C 2201 - от 100 об/мин до 3600 об/мин,
- для Центрифуги Liston C 2202 - от 100 об/мин до 4000 об/мин,
- для Центрифуги Liston C 2203 - от 100 об/мин до 3500 об/мин,

и отображение текущего относительного центробежного ускорения ротора в единицах ОЦУ (показания индикатора ОЦУ × g, где g-ускорение свободного падения 9,81 м/сек²) на цифровом 4-х разрядном индикаторе ОЦУ с дискретностью 10 единиц - при значениях ОЦУ от 10 до 100; 25 единиц - при значениях ОЦУ от 100 до 500; 50 единиц - при значениях ОЦУ от 500 до 2000; 100 единиц - при значениях ОЦУ свыше 2000:

- для Центрифуги Liston C 2201 - от 10×g до 2500×g,
- для Центрифуги Liston C 2202 - от 10×g до 3000×g,
- для Центрифуги Liston C 2203 - от 10×g до 2500×g.

Переключение режимов установки и отображения текущей частоты вращения ротора ОБ/МИН, либо относительного центробежного ускорения ОЦУ осуществляется при помощи нажатия на кнопку ОБ/МИН | ОЦУ. При этом загорается соответствующий светодиод ОБ/МИН, либо ОЦУ.

Получить и дата

Вам на № Инв. №

Получить и дата

Инв. №

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

14

Центрифуга обеспечивает предел допускаемого отклонения частоты вращения ротора от заданного значения не более ± 50 об/мин и предел допускаемого отклонения относительного центробежного ускорения единиц, не более:

- ± 10 при значениях ОЦУ от 10 до 100;
- ± 25 при значениях ОЦУ от 100 до 500;
- ± 50 при значениях ОЦУ от 500 до 2000;
- ± 100 при значениях ОЦУ свыше 2000.

Примечание: Вычисление значений единиц относительного центробежного ускорения на рабочих частотах установленного ротора производится по формуле:

$$\text{ОЦУ} = 1,118 \times R \times (N/1000)^2$$

где R - радиус центрифугирования, в миллиметрах,

N - установленная частота вращения ротора, в оборотах в минуту, указанных в Таблице Д.1 Приложения Д.

4.6 Центрифуга обеспечивает установку и отображение интервала времени центрифугирования на лицевой панели на цифровом 2-х разрядном индикаторе ВРЕМЯ от 1 до 99 минут с дискретностью 1 минута, пределы допускаемого отклонения от заданного значения - не более $\pm 1\%$. Последняя минута текущего интервала времени, оставшаяся до торможения ротора, отображается в секундах.

При пуске Центрифуги без установки интервала времени центрифугирования, на цифровом индикаторе отображается текущий интервал времени в минутах с момента достижения установленной частоты вращения Центрифуги, с отклонением не более $\pm 1\%$ от фактического значения. При этом в правом нижнем углу цифрового индикатора постоянно горит точка.

4.7 Центрифуга обеспечивает выдачу однократного короткого предупреждающего звукового сигнала длительностью около 0,3 секунды при следующих действиях оператора:

- попытке увеличить или уменьшить значение числового параметра кнопками «V» и «Λ», если достигнуто граничное значение;
- попытке пуска Центрифуги нажатием кнопки СТАРТ при незафиксированном замке (замках) крышки;
- при попытке открыть крышку кнопкой ОТКР в режиме «СТОП», если программа обнаружила остаточное вращение ротора со скоростью более 500 об/мин.

4.8 Центрифуга имеет электронное устройство плавного торможения ротора по окончании процесса центрифугирования с возможностью его отключения и перехода в режим свободного выбега.

Время остановки ротора Центрифуги при плавном торможении не превышает 40 секунд.

Центрифуга обеспечивает отключение устройства плавного торможения ротора одновременным нажатием на кнопки «V» и «Λ» у индикатора ОБ/МИН | ОЦУ, при этом между вторым и третьим разрядом загорается точка в мигающем режиме,

Обратное включение устройства плавного торможения ротора производится, по аналогии с отключением, одновременным нажатием на кнопки «V» и «Λ» у индикатора ОБ/МИН | ОЦУ.

4.9 Центрифуга имеет электронное устройство экстренного торможения при возникновении аварийной ситуации во время рабочего цикла:

- превышении установленного порога вибрации (дисбаланса) ротора;
- открывании крышки при вращающемся роторе;

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

- включении питания (после аварийного отключения сети) при остаточной частоте вращения ротора более 500 об/мин.

Время аварийного торможения не превышает для Центрифуг Liston C 2201, Liston C 2202- 25 секунд, для Liston C 2203 -30 секунд.

При возникновении аварийной ситуации во время рабочего цикла в центрифуге звучит однократный звуковой сигнал длительностью около 1 секунды и включается аварийное торможение, на индикаторе ВРЕМЯ выводятся символы «Er». При этом на индикаторе скорости выводится текущая скорость вращения ротора, индикатор СТОП горит в мигающем режиме. При определении ошибки дисбаланса ротора в Центрифуге дополнительно начинает работать в мигающем режиме индикатор ДИСБАЛАНС.

После аварийного останова ротора на индикаторах скорости выводится символьное обозначение типа ошибки:

- «db» и светится индикатор ДИСБАЛАНС в мигающем режиме - превышение установленного порога вибрации (дисбаланса) ротора;

- «no r» - вращение ротора после включения питания (после аварийного отключения сети);

- «Lid»- замок открылся самопроизвольно, без команды;

На дисплее ВРЕМЯ продолжают высвечиваться символы «Er».

Крышка в Центрифуге после аварийного останова не открывается автоматически и остается заблокированной, светодиодные индикаторы СТАРТ и СТОП синхронно мигают, обозначая аварийный останов и необходимость вмешательства оператора.

Для снятия аварийного режима необходимо нажать кнопку СТОП, прозвучит троекратный сигнал общей длительностью не менее 1,5 секунды и индикатор СТОП загорится в постоянном режиме. Центрифуга перейдет в штатный режим СТОП.

4.10 Центрифуга обеспечивает повторяемость установленного режима работы (частоты вращения ротора, интервала времени центрифугирования, включения или отключения режима плавного торможения ротора) после полной остановки вращения ротора и открывании крышки, и после отключения сетевого питания при следующем пуске Центрифуги.

4.11 Центрифуга обеспечивает блокировку включения двигателя при открытой крышке и блокировку открывания крышки при работающем двигателе.

Крышка Центрифуги автоматически приоткрывается после выполнения рабочего цикла и плавного торможения или свободного выбега и остановки ротора, либо нажатием на кнопку ОТКР при неработающем двигателе. При открытой крышке горит индикатор ОТКР. Крышка Центрифуги открывается и закрывается вручную.

4.12 Средняя наработка Центрифуги на отказ - не менее 1500 ч. Критерием отказа является несоответствие требованиям п.п. 3.2, 4.5 – 4.11 настоящего Руководства по эксплуатации.

4.13 Средний срок службы Центрифуги - не менее 5 лет. Конструкция Центрифуги обеспечивает быструю разборку, сборку и легкий доступ к наиболее отказоспособным деталям и сборочным единицам.

4.14 Максимальная температура наружных частей Центрифуг, доступных для прикосновения- не более 80°C при температуре окружающей среды 40°C.

4.15 Детали Центрифуги имеют защитные и защитно-декоративные покрытия:

- металлические и неметаллические неорганические - по ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации 1 ГОСТ 15150;

- лакокрасочные покрытия - по ГОСТ 9.401 для группы условий эксплуатации УХЛ 4 по

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подпись и дата	Лист
ЦМ.012.000.000 РЭ					Лист
					16

000 ЦИРМИ

INFO@CIEMI.RU

WWW.GOSZDRAVNAZOR.RU

Дата

ГОСТ 15150.

Наружные поверхности Центрифуги имеют лакокрасочные покрытия не ниже III класса по ГОСТ 9.032.

4.16 Наружные покрытия Центрифуги устойчивы к дезинфекции химическими методами по МУ 287-113:

- обработка 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% процентного моющего средства по ГОСТ 25644.

4.17 Центрифуга в транспортной упаковке устойчива к воздействию климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.

4.18 Центрифуга обладает вибропрочностью при действии вибрационных нагрузок частотой (10-55) Гц и амплитудой перемещения 0,15 мм.

4.19 Центрифуга, упакованная в транспортную упаковку, сохраняет работоспособность после механических воздействий при транспортировании в соответствии с ГОСТ Р 50444:

а) вибрационная нагрузка амплитудой перемещения 0,35 мм в диапазоне частот от 10 до 55 Гц;

б) ударная нагрузка при пиковом ускорении 100 мс^{-2} , длительностью 16 мс.

4.20 Объемный электромонтаж Центрифуги соответствует ГОСТ 23592, жгуты и их крепления - соответствуют ГОСТ 23586.

4.21 Наружная поверхность корпуса Центрифуги должна быть гладкой, без вмятин, царапин и других дефектов, ухудшающих внешний вид.

4.22 Единая (включая экспорт) буквенно-цифровая кодировка для наименований роторов, бакетов и адаптеров, в которой технические параметры кодируются наборами букв и цифр, приведена в Приложении А.

Соответствие буквенно-цифровой кодировки роторов, бакетов и адаптеров обозначению основных конструкторских документов (спецификаций), по которым они изготовлены, приведены в Таблице Б.1 (Приложение Б).

Максимальные эксплуатационные характеристики Центрифуг приведены в Таблице В.1 (Приложение В.)

Максимальные объемная вместимость и вес загрузки роторов и бакетов приведены в Таблице Г.1 (Приложение Г).

Максимальные эксплуатационные характеристики бакетов и адаптеров приведены в Таблице Д.1 (Приложение Д).

Перечень основных применяемых материалов приведен в Таблице Е.1 (Приложение Е).

Перечень средств испытаний и измерений, применяемых для контроля Центрифуг приведен в Таблице Ж.1 (Приложение Ж).

4.23 Устройство Центрифуги Liston С 2201 показано на Рисунке 1, Центрифуги Liston С 2202 – на Рисунке 2, Центрифуги Liston С 2203 – на Рисунке 3, где (для всех Центрифуг):

- 1 – крышка;
- 2 – датчик оборотов;
- 3 – вал двигателя;
- 4 – ротор;
- 5 – электромагнитный замок
- 6 – плата индикации и управления;
- 7 – амортизатор;

- 8 – электродвигатель;
- 9 – основание (корпус);
- 10 – камера;
- 11 – балансир (утяжелитель);
- 12 – плата силовая;
- 13 – толкатель аварийного открывания крышки; (только для Liston C 2201, Liston C 2202).

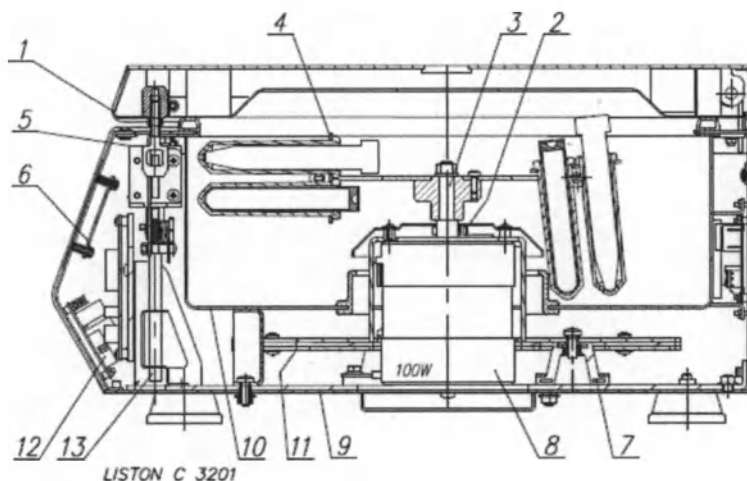


Рисунок 1. Устройство Центрифуги Liston C 2201.

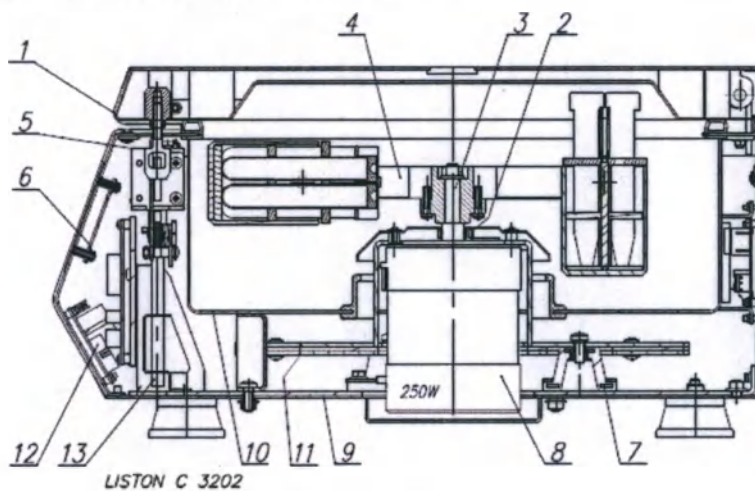


Рисунок 2. Устройство Центрифуги Liston C 2202.

Подпись и дата

Инв.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

18

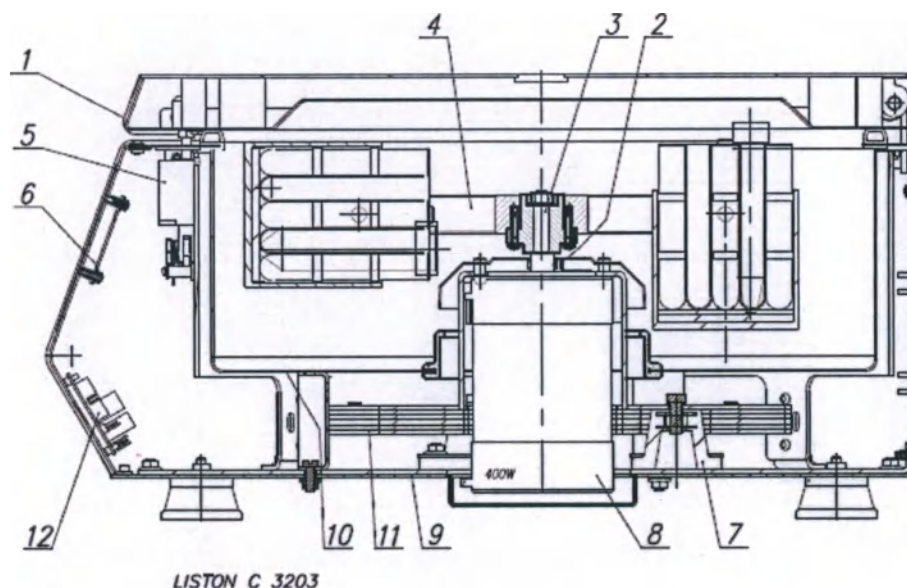


Рисунок 3. Устройство Центрифуги Liston C 2203.

4.24 Панель управления Центрифугами показана на Рисунке 4.

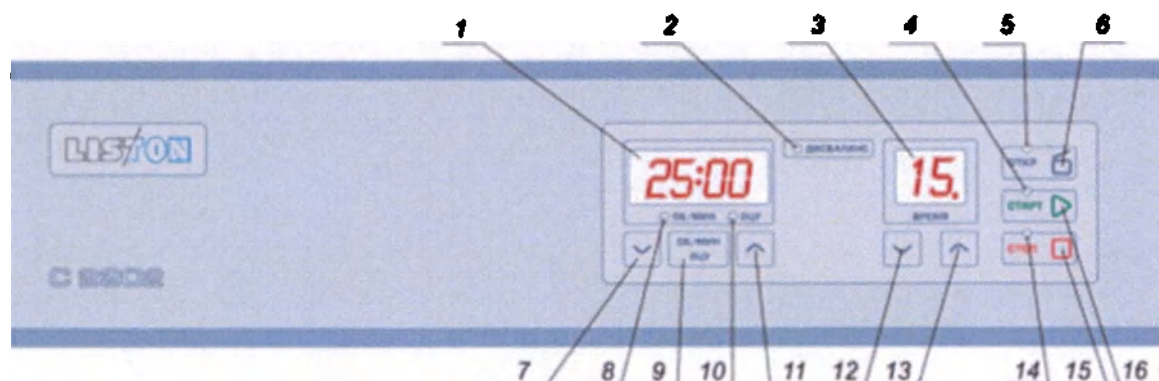


Рисунок 4. Панель управления Центрифугами Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203, где:

- 1 – цифровой индикатор устанавливаемой и текущей частоты вращения;
- 2 – индикатор срабатывания датчика дисбаланса и аварийного торможения ДИСБАЛАНС;
- 3 – цифровой индикатор устанавливаемого и текущего интервала времени работы;
- 4 – светодиод индикации работы СТАРТ;
- 5 – светодиод индикации открытой крышки ОТКР;
- 6 – кнопка открывания крышки ОТКР;
- 7 – кнопка «V» уменьшения значения скорости вращения;
- 8 – светодиод индикации режима ОБ/МИН;
- 9 – кнопка выбора режима ОБ/МИН|ОЦУ;
- 10 – светодиод индикации режима ОЦУ;
- 11 – кнопка «Λ» увеличения значения скорости вращения;
- 12 – кнопка «V» уменьшения значения интервала времени работы;

- 13 – кнопка «Л» увеличения значения интервала времени работы;
- 14 – светодиод индикации торможения и окончания работы Центрифуги СТОП;
- 15 – кнопка окончания работы СТОП;
- 16 – кнопка начала работы СТАРТ;

4.25 Применяемая вставка плавкая -

в Центрифуге С2201 - Вставка плавкая ВПБ6-11 3,15 А (5х20 мм);

в Центрифуге С2202 - Вставка плавкая ВПБ6-12 4,0 А (5х20 мм);

в Центрифуге С2203 - Вставка плавкая ВП2Б -1В 6,3А (5х20 мм).

4.26 Маркировка Центрифуги на фирменной табличке (шильдике) приведена на Рисунке

5.



Рисунок 5. Маркировка Центрифуги на шильдике, где:

- 1 – наименование и изображение зарегистрированного торгового знака предприятия-изготовителя;
- 2 – наименование модели с обозначением технических условий, по которым изготовлена Центрифуга;
- 3 – страна производства;
- 4 – единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза (при наличии сертификата подтверждения соответствия);
- 5 – обозначение изделия в каталоге предприятия-изготовителя;
- 6 – номер изделия по системе нумерации предприятия -изготовителя;
- 7 – дата изготовления изделия;
- 8 – номинальное напряжение питания, В;

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

20

- 9 – максимальный потребляемый ток в установившемся режиме, А;
- 10 – номинальная частота питания, Гц;
- 11 – полная (кажущаяся) потребляемая мощность в установившемся режиме, В·А;
- 12 – максимальная скорость вращения ротора, Об/мин;
- 13 – максимальная плотность разделяемой неоднородной жидкой системы, Кг/дм³;
- 14 – максимальная кинетическая энергия, развиваемая ротором, Н·м;
- 15 – юридический и почтовый адрес предприятия изготовителя, телефон, сайт, e-mail.

4.27 Надписи (обозначения) и условные знаки, располагаемые на Центрифуге:



Обозначение клеммы защитного проводника;



Обозначение клеммы заземления;



Предупреждающий знак: «Внимание! Опасное напряжение 230 Вольт»;



Предупреждающий знак и надпись: «Внимание! Перед началом работы с устройством необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации»;

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
С УСТРОЙСТВОМ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С РУКОВОДСТВОМ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

для закрытия крышки
НАЖАТЬ ЗДЕСЬ

Надпись, обозначающая место нажима рукой для закрытия крышки;



Обозначение направления вращения ротора (против часовой стрелки);

gG 3,15A 250V
5,2x20

Маркировка устанавливаемой в держатель плавкой вставки общего назначения с отключающей способностью во всем диапазоне с указанием номинального тока, номинального напряжения и размеров (диаметр x длина)

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.



Маркировка ротора, включающая в себя: зарегистрированный торговый знак изготовителя, наименование ротора, заводской номер ротора, цифровую идентификацию посадочных мест, совместимость с моделью центрифуги, максимальную загрузку ротора, максимальное ОЦУ, максимальную частоту вращения.



Маркировка бакета, включающая в себя: зарегистрированный торговый знак изготовителя, наименование бакета, совместимость с моделью ротора, максимальную частоту вращения, максимальную загрузку.

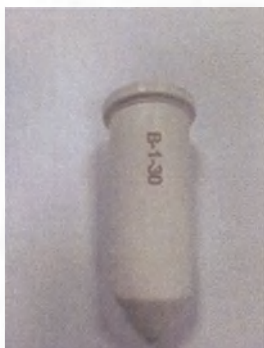

Маркировка бакета малого размера, включающая в себя: название модели бакета.



Маркировка адаптера, включающая в себя: название модели адаптера.

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

22

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1 Спецификация применяемости роторов, бакетов и адаптеров в Центрифугах приведена в Таблице 4.

Таблица 4

Наименование Центрифуги	Наименование ротора	Наименование бакета	Количество бакетов в роторе	Наименование адаптера	Количество адаптеров в роторе	Количество пробирок в роторе
Liston C 2201	S-6-50	B-1-30	6	-	-	6
	Si-6-50	Bi-1-31	6	-	-	6
				TWR-30-1-F	6	6
				-	-	10
	SS-10-15	B-1-17	10	TWR-17-1	10	10
				TWR-16-1-F	10	10
				-	-	10
	Si-10-15	BiL-1-17	10	TWR-17-1	10	10
				TWR-17-1-F	10	10
				-	-	12
	S-12-15	B-1-17	12	TWR-17-1	12	12
				TWR-16-1-F	12	12
				-	-	12
	Si-12-15	BiL-1-17	12	TWR-17-1	12	12
				TWR-17-1-F	12	12
				-	-	20
	S-20-15	B-1-17	20	TWR-17-1	20	20
				TWR-16-1-F	20	20
				-	-	20
	Si-20-15	BiL-1-17	20	TWR-17-1	20	20
TWR-17-1-F				20	20	
-				-	24	
S-24-15	B-1-17	24	TWR-17-1	24	24	
			TWR-16-1-F	24	24	
			-	-	24	
Si-24-15	BiL-1-17	24	TWR-17-1	24	24	
			TWR-17-1-F	24	24	
			-	-	10	
A45-10-15	B-1-17	10	TWR-17-1	10	10	
			TWR-16-1-F	10	10	
			-	-	-	
S-2-PL	B-1PL	2	-	-	-	
Liston C 2202	SiS-4-50	Bi-1-31	4	-	-	4
				TWR-30-1-F	4	4
	SiS-6-50	Bi-1-31	6	-	-	6
				TWR-30-1-F	6	6
	SiS-10-15	Bi-1-17	10	-	-	10
				TWR-17-1	10	10
				TWR-17-1-F	10	10
	S-4-100	B-US-45	4	TASM-11-10	4	40
				TASM-12-8	4	32
				TASM-13-8	4	32
				TASL-13-8	4	32
				TASM-16-6	4	24
TASL-16-6				4	24	
TASM-17-6				4	24	
TASL-17-6	4	24				

Подпись и дата

Взам. н.п. №

Подпись и дата

И.в. №

				TASL-17-4-F	4	16		
				TASL-17-4-FQ	4	16		
				TASM-21-4	4	16		
				TASL-21-4	4	16		
				TASM-22-2	4	8		
				TASM-26-2	4	8		
				TASL-26-2	4	8		
				TASM-26-2-FQ	4	8		
				TASL-26-2-FQ	4	8		
				TASM-29-1	4	4		
				TASL-29-1	4	4		
				TASL-29-1-FQ	4	4		
				TASM-30-1	4	4		
				TASM-31-1	4	4		
				TASL-31-1	4	4		
				TASM-34-1	4	4		
				TASL-34-1	4	4		
				TASM-38-1	4	4		
				TASL-38-1	4	4		
				TWS-45-1	4	4		
				B-UE-45	4	TAEM-13-8	4	32
						TAEL-13-8	4	32
						TAEM-16-7	4	28
						TAEL-16-7	4	28
	TAEM-17-7	4	28					
	TAEL-17-7	4	28					
	A35-30-15	BiL-1-17	30	-	-	30		
				TWR-17-1	30	30		
				TWR-17-1-F	30	30		
	SS-2-PL	BS-1PL	2	-	-	-		
Liston C 2203	S-4-250	B-US-65	4	TASM-13-14	4	56		
				TASL-13-14	4	56		
				TASM-16-12	4	48		
				TASL-16-12	4	48		
				TASM-17-12	4	48		
				TASL-17-12	4	48		
				TASL-17-8-F	4	32		
				TASL-17-8-FQ	4	32		
				TASM-21-7	4	28		
				TASL-21-7	4	28		
				TASM-26-5	4	20		
				TASL-26-5	4	20		
				TASM-26-5-FQ	4	20		
				TASM-29-2	4	8		
				TASL-29-2	4	8		
				TASL-29-2-FQ	4	8		
				TASM-31-2	4	8		
				TASL-31-2	4	8		
				TASM-34-2	4	8		
				TASL-34-2	4	8		
				TASM-38-2	4	8		
				TASL-38-2	4	8		
				TASM-44-1	4	4		
				TASL-44-1	4	4		
				TASL-45-1	4	4		
				TASL-47-1	4	4		
				TASM-48-1	4	4		

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

24

				TASL-48-1	4	4
				TASM-50-1	4	4
				TASL-50-1	4	4
				TASM-54-1	4	4
				TASL-54-1	4	4
				TASL-55-1	4	4
				TASL-56-1	4	4
				TASM-60-1	4	4
				TASL-60-1	4	4
				TWS-65-1	4	4
	SI-2-CC	B-1CC	2	TAR-17-1	2	2
				TAR-21-1	2	2
				TAR-28-1	2	2
				TAR-32-1	2	2

5.2 Комплект поставки Центрифуги соответствует указанному в Таблице 5:

Таблица 5

Наименование	Обозначение документа	Кол-во, штук
Наименование	Обозначение документа	Кол-во, штук
1 Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2201 в составе:		
1.1 Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2201;	ТУ 9443-001-89699725 – 2021	1
1.2 Ротор – S-6-50 (при необходимости);	ЦМ.012.290.000	1
1.3 Ротор – Si-6-50 (при необходимости);	ЦМ.012.290.000-01	1
1.4 Ротор – SS-10-15 (при необходимости);	ЦМ.014.186.000-02	1
1.5 Ротор – Si-10-15 (при необходимости);	ЦМ.012.042.000	1
1.6 Ротор – S-12-15;	ЦМ.014.187.000-01	1
1.7 Ротор – Si-12-15 (при необходимости);	ЦМ.012.041.000-01	1
1.8 Ротор – S-20-15 (при необходимости);	ЦМ.014.186.000-01	1
1.9 Ротор – Si-20-15 (при необходимости);	ЦМ.012.043.000	1
1.10 Ротор – S-24-15 (при необходимости);	ЦМ.014.187.000	1
1.11 Ротор – Si-24-15 (при необходимости);	ЦМ.012.041.000	1
1.12 Ротор – A45-10-15 (при необходимости);	ЦМ.015.208.000	1
1.13 Ротор – S-2-PL (при необходимости);	ЦМ.012.044.000	1
1.14 Бакет – B-1-30 (при необходимости);	ЦМ.015.203.006	6
1.15 Бакет - Bi-1-31 (при необходимости);	ЦМ.014.043.006	6
1.16 Бакет - B-1-17;	ЦМ.014.184.006	не более 24
1.17 Бакет - BiL-1-17 (при необходимости);	ЦМ.012.041.006	не более 24
1.18 Бакет - B-1PL (при необходимости);	ЦМ.012.044.002	6
1.19 Адаптеры – TWR-30-1-F(при необходимости);	ЦМ.014.043.003	6
1.20 Адаптеры - TWR-17-1;	ЦМ.015.200.006	не более 24
1.21 Адаптеры - TWR-16-1-F (при необходимости);	ЦМ.012.000.018-01	не более 24
1.22 Адаптеры - TWR-17-1-F (при необходимости);	ЦМ.012.041.004	не более 24

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

25

1.23	Сетевой шнур ПВС-АП S22C13 2,2 м	ГОСТ 28244-96	1
1.24	<u>Принадлежности:</u>		
1.24.1	Вставка плавкая ВПБ6-11 3,15 А	ОЮО.481.021 ТУ	1
1.24.2	Ключ для винтов с внутренним шестигранником 2,5 мм	ГОСТ 11737-93	1
1.25	<u>Эксплуатационная документация:</u>		
1.25.1	Паспорт	ЦМ.012.000.000 ПС	1
1.25.2	Руководство по эксплуатации	ЦМ.012.000.000 РЭ	1
2	Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2202 в составе:		
2.1	Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2202;	ТУ 9443-001-89699725 – 2021	1
2.2	Ротор – SiS-4-50 (при необходимости);	ЦМ.014.045.000	1
2.3	Ротор - SiS-6-50 (при необходимости);	ЦМ.014.043.000	1
2.4	Ротор - SiS-10-15 (при необходимости);	ЦМ.014.042.000	1
2.5	Ротор - S-4-100;	ЦМ.014.041.000	1
2.6	Ротор - A35-30-15 (при необходимости);	ЦМ.014.044.000	1
2.7	Ротор - SS-2-PL (при необходимости);	ЦМ.014.046.000	1
2.8	Бакеты - Bi-1-31 (при необходимости);	ЦМ.014.043.006	не более 6
2.9	Бакеты - Bi-1-17 (при необходимости);	ЦМ.014.042.006	не более 10
2.10	Бакеты - B-US-45;	ЭМ.Ц.5702.00.00.20	4
2.11	Бакеты - B-UE-45 (при необходимости);	ЦМ.014.000.038	4
2.12	Бакеты - BiL-1-17 (при необходимости);	ЦМ.012.041.006	30
2.13	Бакеты - BS-1PL (при необходимости);	ЦМ.015.045.100	2
2.14	Адаптеры – TWR-30-1-F (при необходимости);	ЦМ.014.043.003	не более 6
2.15	Адаптеры - TWR-17-1 (при необходимости);	ЦМ.015.200.006	не более 30
2.16	Адаптеры - TWR-17-1-F (при необходимости);	ЦМ.012.041.004	не более 30
2.17	Адаптеры - TASM-11-10 (при необходимости);	ЦМ.012.211-02	4
2.18	Адаптеры - TASM-12-8 (при необходимости);	ЦМ.012.212.000	4
2.19	Адаптеры - TASM-13-8 (при необходимости);	ЦМ.012.211.000	4
2.20	Адаптеры - TASL-13-8 (при необходимости);	ЦМ.012.211.000-01	4
2.21	Адаптеры – TASM-16-6 (при необходимости);	ЦМ.012.222.000	4
2.22	Адаптеры – TASL-16-6;	ЦМ.012.221.000	4
2.23	Адаптеры – TASM-17-6 (при необходимости);	ЦМ.012.231.000	4
2.24	Адаптеры – TASL-17-6 (при необходимости);	ЦМ.012.231.000-01	4
2.25	Адаптеры – TASL-17-4-F (при необходимости);	ЦМ.012.251.000	4
2.26	Адаптеры – TASL-17-4-FQ (при необходимости);	ЦМ.012.259.000	4
2.27	Адаптеры – TASM-21-4 (при необходимости);	ЦМ.012.253.000	4
2.28	Адаптеры – TASL-21-4 (при необходимости);	ЦМ.012.253.000-01	4
2.29	Адаптеры – TASM-22-2 (при необходимости);	ЦМ.012.264.000	4
2.30	Адаптеры – TASM-26-2 (при необходимости);	ЦМ.012.254.000	4
2.31	Адаптеры – TASL-26-2 (при необходимости);	ЦМ.012.254.000-01	4
2.32	Адаптеры – TASM-26-2-FQ (при необходимости);	ЦМ.012.263.000	4

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

26

2.33	Адаптеры – TASL-26-2-FQ (при необходимости);	ЦМ.012.262.000	4
2.34	Адаптеры – TASM-29-1 (при необходимости);	ЦМ.012.255.000	4
2.35	Адаптеры – TASL-29-1 (при необходимости);	ЦМ.012.255.000-01	4
2.36	Адаптеры – TASL-29-1-FQ (при необходимости);	ЦМ.012.260.000	4
2.37	Адаптеры – TASM-30-1 (при необходимости);	ЦМ.012.265.000	4
2.38	Адаптеры – TASM-31-1 (при необходимости);	ЦМ.012.256.000	4
2.39	Адаптеры – TASL-31-1 (при необходимости);	ЦМ.012.256.000-01	4
2.40	Адаптеры – TASM-34-1 (при необходимости);	ЦМ.012.257.000	4
2.41	Адаптеры – TASL-34-1 (при необходимости);	ЦМ.012.257.000-01	4
2.42	Адаптеры – TASM-38-1 (при необходимости);	ЦМ.012.258.000	4
2.43	Адаптеры – TASL-38-1 (при необходимости);	ЦМ.012.258.000-01	4
2.44	Адаптеры – TWS-45-1 (при необходимости);	ЦМ.012.261.000	4
2.45	Адаптеры – ТАЕМ-13-8 (при необходимости);	ЦМ.012.234.000	4
2.46	Адаптеры – ТАЕЛ-13-8 (при необходимости);	ЦМ.012.237.000	4
2.47	Адаптеры – ТАЕМ-16-7 (при необходимости);	ЦМ.012.235.000	4
2.48	Адаптеры – ТАЕЛ-16-7 (при необходимости);	ЦМ.012.233.000	4
2.49	Адаптеры – ТАЕМ-17-7 (при необходимости);	ЦМ.012.236.000	4
2.50	Адаптеры – ТАЕЛ-17-7 (при необходимости);	ЦМ.012.232.000	4
2.51	Сетевой шнур ПВС-АП S22C13 2,2 м;	ГОСТ 28244-96	1
2.52 Принадлежности:			
2.52.1	Вставка плавкая ВПБ6-12 4,0 А;	ОЮО.481.021 ТУ	1
2.52.2	Ключ для винтов с внутренним шестигранником 2,5 мм;	ГОСТ 11737-93	1
2.53 Эксплуатационная документация:			
2.53.1	Паспорт	ЦМ.012.000.000 ПС	1
2.53.2	Руководство по эксплуатации	ЦМ.012.000.000 РЭ	1
3 Центрифуга лабораторная медицинская Liston С 2203 в составе:			
3.1	Центрифуга лабораторная медицинская Liston С 2203;	ТУ 9443-001-89699725 – 2021	1
3.2	Ротор – S-4-250;	ЦМ.013.041.000	1
3.3	Ротор – Si-2-CC (при необходимости);	ЦМ.013.044.000	1
3.4	Бакеты – В-US-65;	ЦМ.013.080.001	4
3.5	Бакеты – В-1CC (при необходимости);	ЦМ.013.000.040	2
3.6	Адаптеры –TASM-13-14 (при необходимости);	ЦМ.013.082.000-01	4
3.7	Адаптеры – TASL-13-14 (при необходимости);	ЦМ.013.082.000-01	4
3.8	Адаптеры – TASM-16-12 (при необходимости);	ЦМ.013.083.000-01	4
3.9	Адаптеры – TASL-16-12;	ЦМ.013.083.000	4
3.10	Адаптеры – TASM-17-12 (при необходимости);	ЦМ.013.081.000-01	4
3.11	Адаптеры – TASL-17-12 (при необходимости);	ЦМ.013.081.000	4
3.12	Адаптеры – TASL-17-8-F (при необходимости);	ЦМ.013.099.000	4
3.13	Адаптеры – TASL-17-8-FQ (при необходимости);	ЦМ.013.122.000	4

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

27

3.14	Адаптеры – TASM-21-7 (при необходимости);	ЦМ.013.101.000	4
3.15	Адаптеры – TASL-21-7 (при необходимости);	ЦМ.013.101.000-01	4
3.16	Адаптеры – TASM-26-5 (при необходимости);	ЦМ.013.102.000	4
3.17	Адаптеры – TASL-26-5 (при необходимости);	ЦМ.013.102.000-01	4
3.18	Адаптеры – TASM-26-5-FQ (при необходимости);	ЦМ.013.121.000-01	4
3.19	Адаптеры – TASM-29-2 (при необходимости);	ЦМ.013.103.000	4
3.20	Адаптеры – TASL-29-2 (при необходимости);	ЦМ.013.103.000-01	4
3.21	Адаптеры – TASL-29-2-FQ (при необходимости);	ЦМ.013.123.000	4
3.22	Адаптеры – TASM-31-2 (при необходимости);	ЦМ.013.104.000	4
3.23	Адаптеры – TASL-31-2 (при необходимости);	ЦМ.013.104.000-01	4
3.24	Адаптеры – TASM-34-2 (при необходимости);	ЦМ.013.105.000	4
3.25	Адаптеры – TASL-34-2 (при необходимости);	ЦМ.013.105.000-01	4
3.26	Адаптеры – TASM-38-2 (при необходимости);	ЦМ.013.106.000	4
3.27	Адаптеры – TASL-38-2 (при необходимости);	ЦМ.013.106.000-01	4
3.28	Адаптеры – TASM-44-1 (при необходимости);	ЦМ.013.100.000-01	4
3.29	Адаптеры – TASL-44-1 (при необходимости);	ЦМ.013.100.000	4
3.30	Адаптеры – TASL-45-1 (при необходимости);	ЦМ.013.086.000	4
3.31	Адаптеры – TASM-47-1 (при необходимости);	ЦМ.013.087.000	4
3.32	Адаптеры – TASM-48-1 (при необходимости);	ЦМ.013.085.000	4
3.33	Адаптеры – TASL-48-1 (при необходимости);	ЦМ.013.092.000	4
3.34	Адаптеры – TASM-50-1 (при необходимости);	ЦМ.013.107.000	4
3.35	Адаптеры – TASL-50-1 (при необходимости);	ЦМ.013.107.000-01	4
3.36	Адаптеры – TASM-54-1 (при необходимости);	ЦМ.013.084.000	4
3.37	Адаптеры – TASL-54-1 (при необходимости);	ЦМ.013.097.000	4
3.38	Адаптеры – TASM-55-1 (при необходимости);	ЦМ.013.108.000	4
3.39	Адаптеры – TASL-55-1 (при необходимости);	ЦМ.013.108.000-01	4
3.40	Адаптеры – TASL-56-1 (при необходимости);	ЦМ.013.124.000	4
3.41	Адаптеры – TASM-60-1 (при необходимости);	ЦМ.013.107.000	4
3.42	Адаптеры – TASL-60-1 (при необходимости);	ЦМ.013.107.000-01	4
3.43	Адаптеры – TWS-65-1 (при необходимости);	ЦМ.013.120.000	4
3.44	Адаптеры – TAR-17-1 (при необходимости);	ЦМ.013.045.000	2
3.45	Адаптеры – TAR-21-1 (при необходимости);	ЦМ.013.046.000	2
3.46	Адаптеры – TAR-28-1 (при необходимости);	ЦМ.013.044.006	2
3.47	Адаптеры – TAR-32-1 (при необходимости);	ЦМ.013.044.007	2
3.48	Сетевой шнур ПВС-АП S22C13 2,2 м;	ГОСТ 28244-96	1
3.49 Принадлежности:			
3.49.1	Вставка плавкая ВП 2Б 6,3 А;	АГ 0.481.304 ТУ	1
3.49.2	Ключ для винтов с внутренним шестигранником 2,5 мм;	ГОСТ 11737-93	1
3.50 Эксплуатационная документация:			
3.50.1	Паспорт;	ЦМ.012.000.000 ПС	1
3.50.2	Руководство по эксплуатации.	ЦМ.012.000.000 РЭ	1

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подпись и дата

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Общие рекомендации

6.1.1 Эксплуатация должна осуществляться согласно СанПиН 2.1.3684-21 и ГОСТ ISO/ IEC 17025-2019 в чистых помещениях по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017, ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005 и ГОСТ Р 52539-2006.

6.1.2 Контроль биозагрязнений в лаборатории должен осуществляться по ГОСТ ИСО 14698-1-2005 и ГОСТ ИСО 14698-2-2005.

6.1.3 При работах с Центрифугой следует соблюдать указания ГОСТ Р 53079.4-2008, ГОСТ 27025-86, ГОСТ Р 52905-2007, ГОСТ 31891-2012 и «Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР», Москва, 1981 г.

6.1.4 Во время лабораторных работ следует пользоваться резиновыми перчатками по ГОСТ 20010-93, защитными очками и специальной лабораторной одеждой (халат, костюм или комбинезон).

6.1.5 Стерилизация Центрифуги во время ее эксплуатации не требуется.



6.1.6 Ручное перемещение Центрифуги, без укладки в упаковочный ящик либо транспортировочное средство, должно быть ограничено рабочей зоной, при этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить прибор.

6.1.7 В процессе эксплуатации Центрифуги необходимо обеспечить её содержание в исправном состоянии путем организации систематического технического обслуживания Центрифуги и ее составных частей. С этой целью должен быть назначен персонал, ответственный за организацию и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту.

6.1.8 Обслуживающий персонал должен знать устройство и правила эксплуатации Центрифуги, пройти проверку знаний по технике безопасности и быть допущенным к самостоятельной работе в установленном порядке.

6.1.9 После каждого рабочего сеанса необходимо проверять чистоту рабочего стола, тщательно очищать его, протирать стол, рабочую камеру и наружные поверхности Центрифуги отжатой салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе 3% перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 в соответствии с МУ 287-113.

6.2 Распаковка Центрифуги:

– осторожно извлеките Центрифугу в полиэтиленовом чехле из коробки (сохраните коробку на случай необходимости последующей транспортировки Центрифуги);

– извлеките Центрифугу из полиэтиленового чехла;

– откройте замок крышки Центрифуги при помощи г-образного ключа, поставляемого в комплекте, нажав им через отверстие в днище Центрифуги поз.9 (Рис. 1 и Рис. 2) на толкатель поз.13 (Рис.1 и Рис.2) -для Центрифуг Liston C 2201 и Liston C 2202, либо через 2 отверстия, расположенных с боков Центрифуги, чуть ниже крышки (Рис.3) – для Центрифуги Liston C 2203 и извлеките комплект поставки (адаптеры, документацию и т.д.);

– отвинтите и удалите шесть транспортировочных винтов, расположенных на днище Центрифуги (помечены красной краской). Для этого аккуратно поверните Центрифугу набор. Сохраните их для последующей транспортировки Центрифуги;

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Дата

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

29

- осмотрите Центрифугу на предмет видимых повреждений;
- проверьте комплектность Центрифуги согласно п.5 данного Руководства или согласно паспорту Центрифуги.

6.3 Установка и подключение Центрифуги к сети:

- установите Центрифугу на устойчивую, чистую и ровную поверхность;
- убедитесь, что Центрифуга установлена по уровню и не раскачивается;
- убедитесь, что вентиляция устройства не перекрыта. Для этого необходимо установить Центрифугу таким образом, чтобы задняя стенка прибора с вентиляционными отверстиями была удалена не менее чем на 300 мм от стены (задней вертикальной части стола и т.п.);
- обеспечьте вокруг Центрифуги свободную зону (зону безопасности) не менее 300 мм со всех сторон. (Согласно ГОСТ IEC 61010-2-020-2011 на случай аварийной ситуации);
- выдержите Центрифугу не менее 2 (двух) часов в комнатных условиях, перед подключением к электрической сети, если Центрифуга находилась в условиях отрицательных температур;
- проверьте шильдик (табличка с серийным номером на задней стенке) Центрифуги и убедитесь, что маркированные на нем напряжение и частота соответствуют параметрам вашей электрической сети;
- проверьте ротор, адаптеры и сетевой шнур на предмет повреждений и замените их в случае необходимости;
- подключите Центрифугу к электрической сети;
- убедитесь, что ротор надежно закреплен контргайкой;
- убедитесь вручную, что ротор свободно вращается против часовой стрелки;
- если ротор необходимо установить (заменить на другой) – смотрите п.6.4 настоящего Руководства.



- загружайте ротор симметрично равным количеством пробирок с равным количеством (массой) центрифугируемого материала;
- убедитесь, что вы используете пробирки, предназначенные для центрифугирования;
- центрифугируйте пробирки ТОЛЬКО согласно инструкциям производителей пробирок;
- не превышайте НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ скоростные ограничения для данных пробирок;
- остановите немедленно Центрифугу нажатием кнопки СТОП, если в ходе разгона ротора услышите нехарактерные звуки;



6.4 Установка (замена) и загрузка ротора:

- убедитесь, что на роторе нет следов коррозии или механических повреждений. Никогда не используйте поврежденный ротор!
- установите аккуратно ротор на вал двигателя, держа его ДВУМЯ руками.
- убедитесь, что ротор параллелен горизонтальной оси Центрифуги (перпендикулярен валу двигателя);
- затяните контргайку ключом №13 по часовой стрелке;
- установите все бакеты и адаптеры в ротор, удерживая ротор одной рукой;
- установите пробирки в ротор согласно Рис. 6, Рис. 7 или Рис. 8 (в зависимости от вашего типа ротора);

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

30

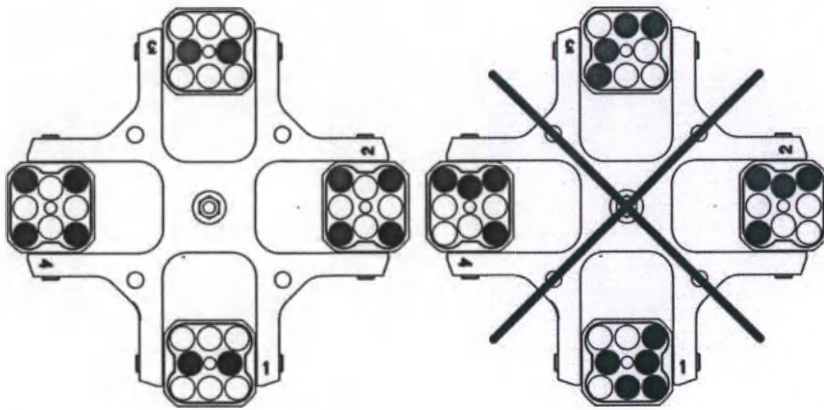


Рис. 6 Схема загрузки универсальных роторов-крестовин

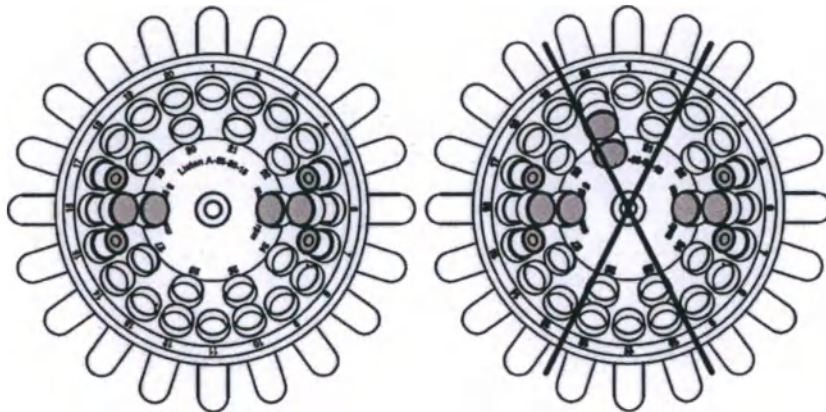


Рис. 7 Схема загрузки угловых роторов.

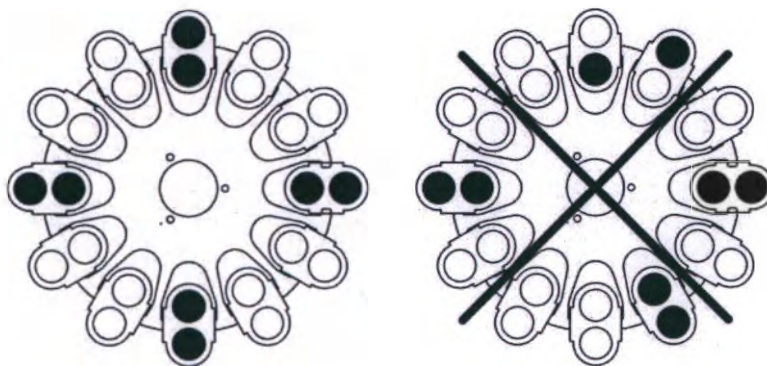


Рис. 8 Схема загрузки бакет-роторов.

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

6.5 Начало эксплуатации

6.5.1 В исходном состоянии выполните предписания по установке, подключению Центрифуги к сети и установке (загрузке) ротора согласно п. п. 6.3, 6.4 настоящего Руководства.

6.5.2 Загрузите ротор до номинального объема, закройте крышку и включите тумблер ВКЛ-ВЫКЛ, расположенный у Центрифуги сзади справа, в положение ВКЛ. При этом загорится индикатор, расположенный рядом с кнопкой СТОП поз.14 Рис. 4. Цифровые индикаторы поз. 1 и поз. 3 Рис.4 высветят ранее используемый режим (последний рабочий режим перед выключением питания). Индикатор ОТКР поз. 5 Рис.4 должен быть погашен.

Установите частоту вращения двигателя в ОБ/МИН, либо в единицах относительного центробежного ускорения ротора ОЦУ согласно п.6.5.4.

Установите время центрифугирования согласно п.6.5.5.

Ознакомьтесь с особенностями работы Центрифуги согласно ниже следующих п.п. 6.5.6-6.5.11.

Включите Центрифугу согласно п.6.5.3.

6.5.3 Включение рабочего режима и остановка работы:

Нажать на кнопку СТАРТ поз.16 Рис.4, при этом индикатор СТОП поз.14 Рис.4 гаснет и загорается индикатор СТАРТ поз.4 Рис.4 в мигающем режиме, ротор начинает вращение и плавно выходит на заданную частоту вращения, цифровой индикатор ОБ/МИН|ОЦУ поз.1 Рис.4 отображает текущую частоту вращения ротора либо относительного центробежного ускорения ротора Центрифуги в единицах ОЦУ.

После выхода Центрифуги на заданную скорость, индикатор СТАРТ поз.4 Рис.4 переходит в режим постоянного свечения, начинается отсчет времени работы Центрифуги в режиме таймера, либо прямого отсчета.

Последняя минута текущего интервала времени, оставшаяся до останова Центрифуги, будет отображаться в секундах.

По истечении заданного времени, во время плавного торможения на индикаторе ОБ/МИН|ОЦУ поз.1 Рис.4 продолжает выводиться текущая скорость вращения ротора, а светодиодный индикатор СТОП поз.14 Рис.4 светится в мигающем режиме.

После плавного торможения и остановки ротора (снижения скорости вращения ротора менее 50 об/мин), загорается индикатор СТОП поз.14 Рис.4 постоянно и включается звуковой сигнал (троекратное звучание), крышка разблокируется и приоткрывается.

После остановки ротора на цифровых индикаторах появятся ранее установленные значения скорости и интервала времени из памяти Центрифуги.

Остановить работу Центрифуги в любой момент можно, нажав на кнопку СТОП поз.15 Рис.4, при этом будет повторен вышеизложенный режим плавного торможения.

6.5.4 Установка частоты вращения двигателя:

Установка частоты вращения двигателя в ОБ/МИН:

Выберите при помощи кнопки ОБ/МИН|ОЦУ поз.9 Рис.4 режим ОБ/МИН. При этом должен загореться светодиод ОБ/МИН поз. 8 Рис.4. При нажатии на кнопки «V» поз.7 и «Λ» поз.11 Рис.4 происходит изменение установки частоты вращения ротора с дискретностью установки и отображения 50 об/мин (левая кнопка «V» – уменьшает заданную величину, правая кнопка «Λ» – увеличивает значение; удержание кнопки, нажатой более 1,5 секунд ведет к ускоренному набору

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

значений на индикаторе). Выбранные частоты вращения принимают значения:

- для Liston C 2201 от 100 об/мин до 3600 об/мин;
- для Liston C 2202 от 100 об/мин до 4000 об/мин;
- для Liston C 2203 от 100 об/мин до 3500 об/мин.

Установка частоты вращения двигателя в единицах относительного центробежного ускорения ротора ОЦУ:

Выбрать при помощи кнопки ОБ/МИН|ОЦУ поз.9 Рис.4 режим ОЦУ, при этом должен загореться светодиод ОЦУ поз.10 Рис.4.

При нажатии на кнопки «У» поз.7 и «Л» поз.11 Рис.4 происходит изменение установки единиц относительного центробежного ускорения (левая кнопка «У» – уменьшает заданную величину, правая кнопка «Л» – увеличивает значение; удержание кнопки, нажатой более 1,5 секунд, ведет к ускоренному набору значений на индикаторе) с дискретностью:

- 10 единиц - при значениях ОЦУ от 10 до 100;
- 25 единиц - при значениях ОЦУ от 100 до 500;
- 50 единиц - при значениях ОЦУ от 500 до 2000;
- 100 единиц - при значениях ОЦУ свыше 2000.

Выбранные единицы относительного центробежного ускорения ротора (показания индикатора ОЦУ x g) принимают значения:

- для Центрифуги Liston C 2201 - от 10xg до 2500xg,
- для Центрифуги Liston C 2202 - от 10xg до 3000xg,
- для Центрифуги Liston C 2203 - от 10xg до 2500xg.

6.5.5 Установка времени центрифугирования:

С помощью кнопок «У» поз.12 и «Л» поз.13 Рис.4 интервала времени работы (левая кнопка «У» – уменьшает заданную величину, правая кнопка «Л» – увеличивает значение; удержание кнопки нажатой более 1,5 секунд ведет к ускоренному набору значений на индикаторе) по индикатору ВРЕМЯ поз. 3 Рис.4 проверить возможность установки интервала времени центрифугирования от 1 до 99 минут с дискретностью 1 минута.

Если установить по цифровому индикатору интервала времени значение 00 минут, то таймер начнет прямой отсчет времени, а на цифровом индикаторе ВРЕМЯ будет отображаться текущий интервал времени в минутах. При этом в правом нижнем углу цифрового индикатора будет постоянно гореть точка. После отработки 99 минут Центрифуга перейдет в режим останова.

Установить по цифровому индикатору ВРЕМЯ интервал времени, через который должно произойти автоматическое отключение Центрифуги, либо значение 00 минут для прямого отсчета времени.

6.5.6 Повторяемость установленных режимов работы.

Центрифуга обеспечивает повторяемость установленного режима работы (частоты вращения ротора, интервала времени центрифугирования, включения или отключения режима плавного торможения ротора) после полной остановки вращения ротора и открывании крышки, и после отключения сетевого питания при следующем пуске Центрифуги.

6.5.7 Значение предупреждающих звуковых сигналов:

Центрифуга обеспечивает выдачу однократного короткого предупреждающего звукового

Получить и дата

Вам изв. № Инв. №

Получить и дата

Ва. Мелюш

сигнала длительностью около 0,3 секунды при следующих действиях оператора:

- попытке увеличить или уменьшить значение числового параметра кнопками «V» и «Λ» поз. 7, поз. 11, поз. 12, поз. 13 Рис. 4, если достигнуто граничное значение;
- попытке пуска Центрифуги нажатием кнопки СТАРТ поз.16 рис.4 при незафиксированном замке (замках) крышки;
- при попытке открыть крышку кнопкой ОТКР поз. 6 Рис.4 в режиме «СТОП», если программа обнаружила остаточное вращение ротора со скоростью более 500 об/мин.

6.5.8 Блокировки:

Блокируется включение двигателя при открытой крышке и открывание крышки при работающем двигателе.

6.5.9 Плавное и экстренное торможение ротора:

Электронное устройство Центрифуги выполняет плавное торможение ротора по окончании процесса центрифугирования и экстренное торможение при возникновении аварийной ситуации во время рабочего цикла.

Время остановки ротора Центрифуги при плавном торможении не превышает 40 секунд, при аварийном торможении не превышает: для Центрифуг Liston C 2201, Liston C 2202 - 25 секунд, для Liston C 2203 -30 секунд.

Имеется возможность для отключения плавного торможения ротора и перехода в режим свободного выбега. Для этого необходимо одновременно нажать кнопки «V» поз.7 и «Λ» поз.11 Рис.4 у индикатора ОБ/МИН|ОЦУ поз.1 Рис.4, при этом между вторым и третьим разрядом загорается точка в мигающем режиме.

Обратное включение устройства плавного торможения ротора производится, по аналогии с отключением, одновременным нажатием на кнопки «V» и «Λ» у индикатора ОБ/МИН|ОЦУ.

Устройство экстренного торможения включается при возникновении аварийной ситуации во время рабочего цикла при:

- превышении установленного порога вибрации (дисбаланса) ротора;
- открывании крышки при вращающемся роторе;
- включении питания (после аварийного отключения сети) при остаточной частоте вращения ротора более 500 об/мин,

при этом звучит однократный звуковой сигнал длительностью около 1 секунды, на индикаторе ВРЕМЯ поз.3 Рис.4 выводятся символы «Er», на индикаторе скорости поз.1 Рис.4 выводится текущая скорость вращения ротора, индикатор СТОП поз.14 Рис.4 горит в мигающем режиме. При определении ошибки дисбаланса ротора в Центрифуге дополнительно начинает работать в мигающем режиме индикатор ДИСБАЛАНС поз.2 Рис.4.

После аварийного останова ротора на индикаторах скорости выводится символьное обозначение типа ошибки:

- «db» и светится индикатор ДИСБАЛАНС поз.2 Рис.4. в мигающем режиме - превышение установленного порога вибрации (дисбаланса) ротора;
- «no r» - вращение ротора после включения питания (после аварийного отключения сети);
- «Lid»- замок открылся самопроизвольно, без команды;

На дисплее ВРЕМЯ поз.1 Рис.4 продолжают высвечиваться символы «Er».

Крышка в Центрифуге после аварийного останова не открывается автоматически и остается

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №подл.

Дата

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

34

заблокированной, светодиодные индикаторы СТАРТ и СТОП поз.4 и поз. 14 Рис.4 синхронно мигают, обозначая аварийный останов и необходимость вмешательства оператора.

Для снятия аварийного режима необходимо нажать кнопку СТОП поз. 15 Рис.4, прозвучит трехкратный сигнал общей длительностью не менее 1,5 секунды и индикатор СТОП поз. 14 Рис.4 загорится в постоянном режиме. Центрифуга перейдет в штатный режим СТОП.

6.5.10 Открывание крышки:

Для принудительного открывания крышки нажмите кнопку ОТКР поз.6 Рис.4. Загорится соответствующий индикатор поз.5 Рис.4.

При экстренной необходимости или при отсутствии напряжения в сети крышка Центрифуги открывается принудительно. Способ открывания изложен в п.6.2 настоящего Руководства.

Крышка Центрифуги автоматически приоткрывается после выполнения рабочего цикла и плавного торможения или свободного выбега и остановки ротора, либо нажатием на кнопку ОТКР при неработающем двигателе. При открытой крышке горит индикатор ОТКР. Крышка Центрифуги открывается и закрывается вручную.

6.5.11 Неуравновешенность масс и защита от чрезмерного дисбаланса ротора:

Обеспечивается штатное центрифугирование жидких систем при неуравновешенности масс в пробирках ротора до 2,0 г.

При превышении установленного в заводских условиях предела порога срабатывания (соответствующего примерно 20 г дисбалансной нагрузки для Центрифуг Liston C 2201 и Liston C 2202 и 40 г - для Liston C 2203) вибрации (дисбаланса) ротором, включается устройство экстренного торможения с соответствующей индикацией (см. п.6.5.9).

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 При транспортировании центрифуг для осуществления гарантийного (послегарантийного) ремонта должны выполняться следующие условия:

7.1.1 Центрифуга в обязательном порядке должна быть продезинфицирована согласно Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (Департамент Госсанэпиднадзора Минздрава России, 30 декабря 1998 г. МУ 287-113) путем протирания рабочей камеры и наружных поверхностей Центрифуги отжатой салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе 3% перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. При этом не допускается использование различных растворителей и бензина.

7.1.2 В штатные резьбовые отверстия снизу центрифуги в обязательном порядке вкручены шесть транспортировочных винтов, расположенных на днище Центрифуги. Вкручивание производится при аккуратном наклоне Центрифуги с закрытой крышкой набор.

7.1.3 В центрифугу вложен паспорт, рекламационный акт и комплект принадлежностей.

7.1.4 Составные части Центрифуги должны быть предохранены от перемещения прокладками и амортизаторами из гофрированного картона или пенопласта. Сменные, запасные детали и принадлежности фасуются в полиэтиленовые пакеты.

7.1.5 Центрифуга упакована в полиэтиленовый мешок, а затем уложена в деревянный ящик или ящик из пятислойного гофрированного картона с применением штатных ложементов из пенопласта или картона, либо других прокладочных материалов (гофрированного картона,

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Дата

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

35

листового пенопласта, стружки и др.), позволяющих исключить перемещение Центрифуги внутри тары и защищающей ее корпус от внешних ударов;

7.1.6 На ящике должны быть нанесены манипуляционные знаки, которые соответствуют значениям "Беречь от влаги", "Хрупкое, осторожно", "Верх, не кантовать":



7.2 Транспортирование Центрифуги должны осуществлять перевозчики, специализирующиеся на перевозке соответствующих грузов и имеющие надлежащие лицензии (разрешения) и опыт перевозок.

7.3 Отправка Центрифуги производится в транспортной таре любым крытым транспортным средством с обеспечением защиты от воздействия атмосферных осадков и тумана, в том числе предусматриваются:

- прямые перевозки автомобильным транспортом на расстояние до 1 000 км по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничений скорости или со скоростью до 40 км/ч на расстояние до 250 км по булыжным или грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории);

- смешанные перевозки железнодорожным, воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речными видами транспорта, в сочетании их между собой, и автомобильным транспортом, а также перевозки морским транспортом.

7.4 Условия перевозки Центрифуги в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216-78.

7.5 Погрузка и разгрузка Центрифуги должна производиться по ГОСТ 12.3.009-76.

7.6 Размещение и крепление тары в транспортных средствах должно обеспечивать её устойчивое положение, исключать возможность смещения и ударов друг о друга, о стенки транспортной тары и транспортных средств.

7.7 Запрещается штабелирование ящиков при транспортировании или расположение на них посторонних грузов.

8 ХРАНЕНИЕ

8.1 Условия хранения Центрифуги должны соответствовать условиям хранения 2 ГОСТ 15150. Центрифуга в упакованном виде должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50 до плюс 40 °С с относительной влажностью воздуха до 98% при +25 °С.

8.2 Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

9.1 В процессе эксплуатации необходимо систематическое техническое обслуживание Центрифуги и ее составных частей работниками, которые эксплуатируют и обслуживают Центрифугу.

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9.2 Обслуживание и ремонт Центрифуги осуществляется только после её обесточивания.

9.3 Межремонтное обслуживание

Межремонтное обслуживание выполняется персоналом, допущенным к эксплуатации оборудования лаборатории.

Межремонтное обслуживание направлено на поддержание Центрифуги в постоянной технической готовности и обеспечении бесперебойной ее эксплуатации и заключается в:

- ежедневном протирании рабочей камеры и наружных поверхностей Центрифуги отжатой салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе 3% перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 в соответствии с ОСТ 42-21-2-85 и «Методическими указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (Департамент Госсанэпиднадзора Минздрава России, 30 декабря 1998 г. МУ 287-113), не допускается использование различных растворителей и бензина;

- ежедневном поддержании необходимой чистоты используемых пробирок, адаптеров и бакетов в соответствии с МУ 287-113;

- периодическом (не реже одного раза в неделю) внешнем осмотре корпуса, кабеля питания, органов управления, роторов, бакетов, адаптеров и других частей Центрифуги на предмет исправности, повреждений защитных покрытий, целостности корпуса, изоляции электропроводки, устройства заземления и замене деталей, пришедших в негодность.

9.4 Малый (текущий) ремонт

Малый (текущий) ремонт и осмотр выполняется специально обученным персоналом, прошедшим инструктаж по ГОСТ 12.0.004-2015, проверенным на знание конструкции Центрифуги и имеющим квалификацию по электробезопасности не ниже III.

Малый (текущий) ремонт и осмотр направлен на выявление дефектов и восстановление нормальной работоспособности Центрифуги и её составных частей:

- в случае каких-либо неисправностей или поломок, вызванных использованием прибора, необходимости корректирующего обслуживания;

- при контроле технического состояния и профилактики в составе лабораторного оборудования в сроки, установленные в лечебно-профилактическом учреждении;

- с периодичностью от 3 до 6 месяцев в зависимости от интенсивности и условий использования.

9.5 После ремонта или установки Центрифуга подвергается частичному техническому освидетельствованию с целью установления, что заменённое, вновь установленное или отремонтированное оборудование находится в исправном состоянии, обеспечивающем безопасную работу.

Проверяются основные параметры и технические характеристики Центрифуги согласно пп. 4.5- 4.11 настоящего Руководства.

Функционирование Центрифуги подвергается визуальному и измерительному контролю согласно указаниям по эксплуатации Центрифуги п.6 настоящего Руководства:

- выполняется контрольная проверка работы во всех режимах;

- испытываются устройства безопасности;

- испытывается защитное зануление (заземление).

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Дата

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

37

9.6 Центрифуга, отработавшая срок службы, подвергается обследованию с целью определения возможности продления срока её безопасной эксплуатации. Определяется ее состояние с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии.

Центрифуга подвергается частичному техническому освидетельствованию согласно п.9.5 настоящего Руководства.

На основании результатов обследования и анализа условий эксплуатации, технического освидетельствования проводятся работы по определению остаточного ресурса прибора.

9.7 Детали, подверженные износу или дефектные и подлежащие замене, запрашиваются у изготовителя в соответствии с указанием модели Центрифуги и её заводского номера.

10 УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 После окончания срока службы, при наступлении предельных состояний и решении о непригодности Центрифуги к ремонту и дальнейшей эксплуатации или нецелесообразности дальнейшей эксплуатации, составные части Центрифуги должны быть демонтированы и утилизированы в установленном порядке в специализированных организациях.

10.2 Перед утилизацией отдельные устройства должны быть разбракованы на предмет оценки возможности дальнейшего использования вне Центрифуги.

10.3 В конце срока службы в медицинских учреждениях, Центрифуга и ее составные части, кроме пробирок, утилизируются в соответствии с разделом X СанПиН 2.1.3684-21 (для отходов класса А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам), СП 2.1.7.1386-03 и Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

Корпус и другие металлические части Центрифуги подлежат переработке как вторичные ресурсы чёрных и цветных металлов.

10.4 Пробирки с образцами относятся к классу Б (эпидемиологически опасные отходы в соответствии с разделом X СанПиН 2.1.3684-21) и утилизируются с применением аппаратных способов обеззараживания, с применением физических методов и изменения внешнего вида, исключающего возможность их повторного применения.

10.5 Персонал, осуществляющий утилизацию, должен соблюдать правила безопасности проведения того или иного способа утилизации.

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества Центрифуги требованиям ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ ИЕС 61010-1-2014; ГОСТ ИЕС 61010-2-020-2013; ГОСТ Р МЭК 62304-2013; ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, технических условий ТУ 9443-001-89699725 – 2021 и комплекта конструкторской документации:

-ЦМ.012.000.000 для Центрифуги Liston C 2201;

-ЦМ.014.000.000 для Центрифуги Liston C 2202;

-ЦМ.013.000.000 для Центрифуги Liston C 2203,

при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

11.2 Гарантийный срок службы Центрифуги - 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты отгрузки с предприятия- изготовителя.

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Дата

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

38

11.3 Гарантийный срок хранения Центрифуги – 12 месяцев с даты отгрузки с предприятия-изготовителя.

11.4 Претензии по качеству и комплектности в период гарантийного срока предъявлять предприятию - изготовителю. После ремонта и/или гарантийного обслуживания Центрифуга будет возвращена владельцу в исходном состоянии на момент обратной поставки.

11.5 В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель ремонтирует или заменяет Центрифугу при наличии настоящего паспорта, рекламационного акта, правильно заполненного гарантийного талона и неукоснительного выполнения требований пунктов 1,2, 6, 7, 8 Руководства по эксплуатации Центрифуги.

11.6 Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие изделия и запасные части устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации Центрифуги и истекает одновременно с истечением срока её гарантии.

11.7 В процессе эксплуатации послегарантийный ремонт Центрифуги осуществляет предприятие - изготовитель на договорной основе.

11.8 Гарантия не распространяется и не устанавливается:

11.8.1 При попытках самостоятельного ремонта без разрешения изготовителя;

11.8.2 На недостатки изделий, которые вызваны несоблюдением прилагаемого Руководства по эксплуатации, транспортными повреждениями, неправильной установкой (в том числе подключением к неправильному напряжению питания), неправильным использованием (включая перегрузку по весу), попаданием внутрь изделия посторонних предметов и другими подобными причинами;

11.8.3 На изделия, которые подвергались конструктивным изменениям неуполномоченными лицами и, если удален, неразборчив или изменен серийный номер изделия;

11.8.4 На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устраненными недостатками, либо возникшими вследствие технического обслуживания или ремонта не уполномоченными организациями, либо ремонт с использованием неоригинальных запасных частей;

11.8.5 На недостатки, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как недопустимые государственными стандартами перепады напряжения питания, при ущербе, причиненном вследствие форс-мажорных обстоятельств (явления природы и стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия и т.п.);

11.8.6 На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации;

11.8.7 На такие повреждения деталей, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования или которые произошли в результате естественного износа (включая расходные материалы), такие как лампочки, элементы питания, фильтры;

11.8.8 На повреждения вследствие химической или электрохимической реакции, ржавчины, коррозии или воздействия воды, на повреждения вследствие пребывания в необычной (ненадлежащей) окружающей среде;

11.8.9 На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием, оговоренный в Руководстве по эксплуатации.

11.9 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без извещения вносить в конструкцию Центрифуги незначительные изменения (доработки), не влияющие на работоспособность прибора в целом.

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Дата

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

39

12 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕПОЛАДКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

12.1 Перед обращением в сервисный центр рекомендуется изучить настоящий раздел на предмет установления возможной причины возникновения проблемы. Несколько простейших проверок и наладок могут устранить её и привести к нормальному функционированию.

12.2 Если приведенные ниже способы решения возникших неисправностей не помогают, необходимо обратиться в сервисную службу!

Неквалифицированные действия могут привести к травме, повреждению Центрифуги и аннулированию гарантийных обязательств!

12.3 Выполнение любой операции, явно запрещенной в настоящем Руководстве, а также любые настройки, действия по сборке, не рекомендованные или запрещенные в настоящем Руководстве, аннулируют гарантийные обязательства!

Таблица 6

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. Не включается двигатель при нажатии на кнопку СТАРТ и горит индикатор ОТКР	Не закрыта плотно крышка.	Закрыть плотно крышку
2. Центрифуга не работает (ротор не вращается).	1. Отсутствует электроэнергия в цепи источника питания. 2. Перегорела вставка плавкая.	1. Проверить наличие электроэнергии в цепи источника питания. 2. Заменить вставку плавкую.
3. При наборе скорости происходит срабатывание датчика дисбаланса, остановка ротора.	1. Не уравновешены массы в пробирках. 2. Центрифуга установлена не по уровню, не устойчиво, на не выравненном горизонтальном основании.	1. Уравновесить массы в пробирках. 2. Установить Центрифугу на устойчивом горизонтальном основании по уровню.
4. При длительной работе происходит останов с ошибкой «Hot»	Перегрев двигателя	Дать остыть двигателю не менее 1 часа.

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Обязательное)

БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ КОДИРОВКА НАИМЕНОВАНИЙ РОТОРОВ, БАКЕТОВ И АДАПТЕРОВ

Для наименования роторов, бакетов и адаптеров принята единая (включая экспорт) буквенно-цифровая кодировка, в которой технические параметры кодируются наборами букв и цифр:

Для роторов:

Наименование ротора состоит из:

1234-5-6-7, где:

1 – обозначение типа ротора, S – бакет-ротор, A – угловой ротор;

2 – е-бюджетное исполнение ротора, i – версия ротора из нержавеющей стали;

3 – версия ротора для работы с повышенной частотой вращения S;

4 – рабочий угол ротора, градусов (указывается для роторов с углом работы, отличным от 90 градусов);

5 – количество мест в роторе, штук;

6 – максимальный объем пробирки, мл;

7 – PL – ротор для планшетов типа DWP и MTP, GCARD – ротор для гель-карт.

Например:

S-12-15 – бакет-ротор (S) на 12 бакетов по 15 мл;

S-4-105 – бакет-ротор (S) на 4 бакета по 105 мл;

SiS-6-50 – бакет-ротор(S) из нержавеющей стали (i) с повышенной частотой вращения (S) на 6 бакетов по 50 мл;

A35-30-15 – угловой ротор (A), с рабочим углом 35 градусов на 30 мест по 15 мл;

S-2-PL – бакет-ротор (S) на 2 бакета для планшетов (PL);

SS-2-PL – бакет-ротор (S) с повышенной частотой вращения (S) на 2 бакета для планшетов (PL);

S-12-GCARD – бакет-ротор (S) на 12 бакетов для гель-карт (GCARD);

Si-2-CC – бакет-ротор (S) из нержавеющей стали (i) на 2 бакета для шприц-пробирок.

Для бакетов:

Наименование бакета состоит из:

1234– 56 – 7, где:

1 – обозначение бакета – B;

2 – материал изготовления бакета, i – версия бакета из нержавеющей стали;

3 – высота бакета - L-удлиненный, M-укороченный;

4 – версия бакета – A- аэрозоленепроницаемая, S- для работы с повышенной частотой вращения;

5 – количество мест в бакете, штук; в случае если количество мест зависит от адаптера, указывается не число, а буквенный символ, U-универсальный;

6 – форма универсального бакета- R- круглый, S- прямоугольный или овальный, E-специальной формы, PL-для планшет, GCARD- для гель-карт;

7 – максимальный внутренний диаметр бакета, мм.

Например:

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

В-1-17 – бакет (В) на одно место, максимальный внутренний диаметр 17 мм;
 Вi-1-17 – бакет (В) из нержавеющей стали (i) на одно место, максимальный диаметр 17 мм;
 ВiL-1-17 – бакет (В) из нержавеющей стали (i), удлиненный (L), на одно место, максимальный диаметр 17 мм;
 В-UR-45 – бакет (В), универсальный (U), круглый (R), максимальный внутренний диаметр 45 мм;
 В-UE-45 – бакет (В), универсальный (U), специальной формы (E), максимальный внутренний диаметр 45 мм;
 ВА-UR-45 – бакет (В), аэрозоленепроницаемый (А), универсальный (U), круглый (R), максимальный внутренний диаметр 45 мм;
 В-1PL – бакет (В) на 1 место, для планшет (PL);
 BS-1PL – бакет (В) на 1 место для работы с повышенной частотой вращения (S), для планшет (PL);
 В-1GCARD – бакет (В) на 1 место, для гель-карт (GCARD);
 В-1CC – бакет (В) на 1 место шприц-пробирок.

Для адаптеров:

Наименование адаптера состоит из:

1234-5-6-78, где:

- 1 – обозначение адаптера - Т;
 - 2 – обозначение конструкции- А - сборный, W – адаптер-вставка;
 - 3 – форма адаптера - R - для круглого бакета, S - для прямоугольного или овального бакета, E – специальной формы;
 - 4 – высота адаптера - L-удлиненный, М-укороченный;
 - 5 – максимальный диаметр пробирки, устанавливаемой в адаптер, или диаметр адаптера, устанавливаемого на дно бакета для уменьшения его высоты, мм;
 - 6 – количество мест в адаптере, штук;
 - 7 – форма устанавливаемой пробирки или планшета, С- для пробирок конической формы, F-для пробирок типа «Фалькон»;
 - 8 – материал изготовления адаптера – Q-изготовленный из амортизирующего материала.
- Например:

TWR-16-1-F – адаптер - вставка (TW), для круглого бакета (R), диаметр бакета, куда он может быть установлен- 16 мм, на одно место, для пробирок типа «Фалькон»;

TASL-17-4-FQ – сборный адаптер (TA), для прямоугольного бакета (S), удлиненный (L), максимальный диаметр пробирок 17 мм, на 4 места, для пробирок типа «Фалькон», изготовленный из амортизирующего материала (Q);

TWS-65-1 – адаптер-вставка (TW), для прямоугольного бакета (S), максимальный диаметр 65 мм, 1 место;

ТАЕМ-17-7 – сборный адаптер (TA), специальной формы (E), укороченный (М), максимальный диаметр 17 мм, 7 мест.

Подпись и дата

Вам. инв. № Инв. №

Подпись и дата

Инв. №

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

42

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Обязательное)

Соответствие буквенно-цифровой кодировки роторов, бакетов и адаптеров обозначению спецификаций.

Таблица Б.1

Наименование ротора	Обозначение конструкторского документа	Наименование бакета	Обозначение конструкторского документа	Наименование адаптера	Обозначение конструкторского документа
S-4-50	ЦМ.015.044.000	B-1-16	ЦМ.015.218.006	TWR-15-1	ЦМ.015.201.006
Se-4-50	ЦМ.015.209.000	B-1-17	ЦМ.014.184.006	TWR-17-1	ЦМ.015.200.006
SiS-4-50	ЦМ.014.045.000	Bi-1-17	ЦМ.014.042.006	TWR-17-1-F	ЦМ.012.041.004
S-6-50	ЦМ.012.290.000	BiL-1-17	ЦМ.012.041.006	TWR-16-1-F	ЦМ.012.000.018-01
Si-6-50	ЦМ.012.290.000-01	B-1-30	ЦМ.015.203.006	TWR-30-1-F	ЦМ.014.043.003
SiS-6-50	ЦМ.014.043.000	Bi-1-31	ЦМ.014.043.006	TASM-11-10	ЦМ.012.211-02
S-8-15	ЦМ.015.042.000	B-US-45	ЭМ.Ц.5702.00.00.20	TACM-12-8	ЦМ.012.212.000
SS-10-15	ЦМ.014.186.000-02	B-UE-45	ЦМ.014.000.038	TACM-13-8	ЦМ.012.211.000
S-10-15	ЭМ.Ц001.104.000	B-US-65	ЦМ.013.080.001	TASL-13-8	ЦМ.012.211.000-01
Si-10-15	ЦМ.012.042.000	B-1PL	ЦМ.012.044.002	TASM-16-6	ЦМ.012.222.000
SiS-10-15	ЦМ.014.042.000	BS-1PL	ЦМ.015.045.100	TASL-16-6	ЦМ.012.221.000
S-12-10	ЦМ.015.043.000	B-1GCARD	ЦМ.015.046.003	TASM-17-6	ЦМ.012.231.000
S-12-15	ЦМ.014.187.000-01	B-1CC	ЦМ.013.000.040	TASL-17-6	ЦМ.012.231.000-01
Se-12-15	ЦМ.015.040.000			TASL-17-4-F	ЦМ.012.251.000
Si-12-15	ЦМ.012.041.000-01			TASL-17-4-FQ	ЦМ.012.259.000
S-20-15	ЦМ.014.186.000-01			TASM-21-4	ЦМ.012.253.000
Si-20-15	ЦМ.012.043.000			TASL-21-4	ЦМ.012.253.000-01
S-24-15	ЦМ.014.187.000			TASM-22-2	ЦМ.012.264.000
Si-24-15	ЦМ.012.041.000			TASM-26-2	ЦМ.012.254.000
A45-10-15	ЦМ.015.208.000			TASL-26-2	ЦМ.012.254.000-01
A35-30-15	ЦМ.014.044.000			TASM-26-2-FQ	ЦМ.012.263.000
S-4-100	ЦМ.014.041.000			TASL-26-2-FQ	ЦМ.012.262.000
S-4-250	ЦМ.013.041.000			TASM-29-1	ЦМ.012.255.000
S-2-PL	ЦМ.012.044.000			TASL-29-1	ЦМ.012.255.000-01
SS-2-PL	ЦМ.014.046.000			TASL-29-1-FQ	ЦМ.012.260.000
S-12-GCARD	ЦМ.015.046.000			TASM-30-1	ЦМ.012.265.000
S-20-GCARD	ЦМ.015.046.000-02			TASM-31-1	ЦМ.012.256.000
S-24-GCARD	ЦМ.015.046.000-01			TASL-31-1	ЦМ.012.256.000-01
Si-2-CC	ЦМ.013.044.000			TASM-34-1	ЦМ.012.257.000
				TASL-34-1	ЦМ.012.257.000-01
				TASM-38-1	ЦМ.012.258.000
				TASL-38-1	ЦМ.012.258.000-01
				TWS-45-1	ЦМ.012.261.000
				TAEM-13-8	ЦМ.012.234.000
				TAEL-13-8	ЦМ.012.237.000
				TAEM-16-7	ЦМ.012.235.000
				TAEL-16-7	ЦМ.012.233.000
				TAEM-17-7	ЦМ.012.236.000
				TAEL-17-7	ЦМ.012.232.000
				TASM-13-14	ЦМ.013.082.000
				TASL-13-14	ЦМ.013.082.000-01
				TASM-16-12	ЦМ.013.083.000-01
				TASL-16-12	ЦМ.013.083.000
				TASM-17-12	ЦМ.013.081.000-01
				TASL-17-12	ЦМ.013.081.000
				TASL-17-8-F	ЦМ.013.099.000
				TASL-17-8-FQ	ЦМ.013.122.000
				TASM-21-7	ЦМ.013.101.000

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

43

			TASL-21-7	ЦМ.013.101.000-01
			TASM-26-5	ЦМ.013.102.000
			TASL-26-5	ЦМ.013.102.000-01
			TASL-26-5-FQ	ЦМ.013.121.000-01
			TASM-29-2	ЦМ.013.103.000
			TASL-29-2	ЦМ.013.103.000-01
			TASL-29-2-FQ	ЦМ.013.123.000
			TASM-31-2	ЦМ.013.104.000
			TASL-31-2	ЦМ.013.104.000-01
			TASM-34-2	ЦМ.013.105.000
			TASL-34-2	ЦМ.013.105.000-01
			TASM-38-2	ЦМ.013.106.000
			TASL-38-2	ЦМ.013.106.000-01
			TASM-44-1	ЦМ.013.100.000-01
			TASL-44-1	ЦМ.013.100.000
			TASL-45-1	ЦМ.013.086.000
			TASM-47-1	ЦМ.013.087.000
			TASM-48-1	ЦМ.013.085.000
			TASL-48-1	ЦМ.013.092.000
			TASM-50-1	ЦМ.013.107.000
			TASL-50-1	ЦМ.013.107.000-01
			TASM-54-1	ЦМ.013.084.000
			TASL-54-1	ЦМ.013.097.000
			TASM-55-1	ЦМ.013.108.000
			TASL-55-1	ЦМ.013.108.000-01
			TASL-56-1	ЦМ.013.124.000
			TASM-60-1	ЦМ.013.109.000
			TASL-60-1	ЦМ.013.109.000-01
			TWS-65-1	ЦМ.013.120.000
			TAR-17-1	ЦМ.013.046.000
			TAR-21-1	ЦМ.013.045.000
			TAR-28-1	ЦМ.013.044.006
			TAR-32-1	ЦМ.013.044.007

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(Обязательное)

Максимальные эксплуатационные характеристики Центрифуг.

Таблица В.1

Наименование Центрифуги	Максимальная вместимость ро- тора, кол. мест х мл	Макс. вес загрузки ро- тора, г	Макс. ско- рость, об/мин	Макс. ОЦУ (х г)	Максимальная кинетиче- ская энергия ротора, Н х м
Liston C 2201	6x50, 20x15, (12x10+12x15)	1208	3600	2500	1400
Liston C 2202	4x100, 28x10, 30x15	1650	4000	3005	3290
Liston C 2203	4x250, 48x15	4200	3500	2493	6260

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

44

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(Обязательное)

Максимальные объемная вместимость и вес загрузки роторов и бакетов.

Таблица Г.1

Наименование Центрифуги	Наименование ротора	Наименование бакета	Макс. вместимость ротора, мл	Макс. вес загрузки ротора, г	Кол-во бакетов в роторе, шт	Макс. вместим. бакета, мл	Макс. вес загрузки бакета (включая адаптер), г	Макс. вес загруженного бакета, г
Liston C 2201	S-6-50	B-1-30	300	660	6	50	75	110
	Si-6-50	Bi-1-31	300	740	6	50	82	123
	SS-10-15	B-1-17	150	500	10	15	31	50
	Si-10-15	BiL-1-17	150	550	10	15	31	55
	S-12-15	B-1-17	180	600	12	15	31	50
	Si-12-15	BiL-1-17	180	660	12	15	31	55
	S-20-15	B-1-17	300	1000	20	15	31	50
	Si-20-15	BiL-1-17	300	1100	20	15	31	55
	S-24-15	B-1-17	300	1140	12	10	25	45
					12	15	31	50
					12	10	25	48
	Si-24-15	BiL-1-17	300	1208	12	15	31	55
					12	15	31	55
	A45-10-15	B-1-17	150	500	10	15	31	50
	S-2-PL	B-1PL		80	2	1PL	10	40
Liston C 2202	SiS-4-50	Bi-1-31	200	492	4	50	82	123
	SiS-6-50	Bi-1-31	300	738	6	50	82	123
	SiS-10-15	Bi-1-17	150	540	10	15	31	54
	S-4-100	B-US-45	400	1580	4	100	249	395
		B-UE-45	420	1344	4	105	184	336
	A35-30-15	BiL-1-17	450	1650	30	15	31	55
	SS-2-PL	BS-1PL		160	2	1PL	20	80
Liston C 2203	S-4-250	B-US-65	1000	4200	4	250	580	1050
	Si-2-CC	B-1CC	120		2	60		

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(Обязательное)

Максимальные эксплуатационные характеристики бакетов и адаптеров.

Таблица Д.1

Наименование Центрифуги	Наименование ротора	Наименование бакета	Наименование адаптера	Диаметр пробирки, мм	Максимальная\минимальная длина пробирки, мм	Радиус Центрифугирования, мм	Макс. скорость, об/мин	Макс. ОЦУ (x g)
Liston C 2201	S-6-50	B-1-30	-	29	115\101	166	3600	2405
	Si-6-50	Bi-1-31	-	31	115\101	169	3600	2449
			TWR-30-1-F		115\101	165		2391
	SS-10-15	B-1-17	-	17	121\95	167	3600	2420
			TWR-17-1		100\75	147		2130
			TWR-16-1-F		121\95	165		2391
	Si-10-15	BiL-1-17	-	17	121\95	169	3600	2449
			TWR-17-1		100\75	149		2159
			TWR-17-1-F		121\95	167		2420
	S-12-15	B-1-17	-	17	112\95	167	3600	2420
			TWR-17-1		92\75	147		2130
			TWR-16-1-F		112\95	165		2391
	Si-12-15	BiL-1-17	-	17	110\95	168	3600	2434

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

45

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Liston C 2202	S-20-15	B-1-17	TWR-17-1	17	90\75	148	3600	2144
			TWR-17-1-F		110\95	166		2405
			-		121\95	167		2420
			TWR-17-1		100\75	147		2130
			TWR-16-1-F		121\95	165		2391
	Si-20-15	BiL-1-17	-	17	121\95	169	3600	2449
			TWR-17-1		100\75	149		2159
			TWR-17-1-F		121\95	167		2420
	S-24-15	B-1-17	-	17	100\95	167	3600	2420
			-		121\95	167		2420
			TWR-17-1		80\75	147		2130
			-		100\75	147		2130
			TWR-16-1-F		100\75	165		2391
	Si-24-15	BiL-1-17	-	17	121\95	168	3600	2434
			-		121\95	168		2434
			TWR-17-1		80\75	148		2144
			-		100\75	148		2144
			TWR-17-1-F		100\95	165		2391
	A45-10-15	B-1-17	-	17	121\95	138	3600	2000
			TWR-17-1		100\75	118		1710
			TWR-16-1-F		121\95	136		1961
	S-2-PL	B-1PL	-	-	-	113	3600	1637
	SiS-4-50	Bi-1-31	-	31	115\101	168	4000	3005
			TWR-30-1-F		115\101	163		2916
	SiS-6-50	Bi-1-31	-	31	115\101	168	4000	3005
			TWR-30-1-F		115\101	163		2916
	SiS-10-15	Bi-1-17	-	17	121\90	162	4000	2898
			TWR-17-1		100\70	142		2540
			TWR-17-1-F		121\90	160		2862
	S-4-100	B-US-45	TASM-11-10	11	92\66	160	4000	2862
			TASM-12-8	12	40\30	160	4000	2862
			TASM-13-8	13	92\65	160	4000	2862
			TASL-13-8	13	100\82	160	4000	2862
			TASM-16-6	16	85\75	160	4000	2862
			TASL-16-6	16	102\92	160	4000	2862
			TASM-17-6	17	85\65	160	4000	2862
			TASL-17-6	17	105\92	160	4000	2862
			TASL-17-4-F	17	121\80	160	4000	2862
			TASL-17-4-FQ	17	121\80	160	4000	2862
			TASM-21-4	21	85\65	160	4000	2862
			TASL-21-4	21	105\82	160	4000	2862
			TASM-22-2	22	40\30	160	4000	2862
			TASM-26-2	26	85\65	160	4000	2862
			TASL-26-2	26	105\85	160	4000	2862
			TASM-26-2-FQ	26	90\65	160	4000	2862
			TASL-26-2-FQ	26	110\85	160	4000	2862
			TASM-29-1	29	85\65	160	4000	2862
			TASL-29-1	29	115\85	160	4000	2862
			TASL-29-1-FQ	29	115\85	160	4000	2862
			TASM-30-1	30	85\65	160	4000	2862
			TASM-31-1	31	85\65	160	4000	2862
			TASL-31-1	31	105\85	160	4000	2862
			TASM-34-1	34	85\65	160	4000	2862
			TASL-34-1	34	105\85	160	4000	2862
			TASM-38-1	38	85\65	160	4000	2862

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

46

Подпись и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Дата

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист

47

			TASL-38-1	38	106\85	160	4000	2862
			TWS-45-1	45	120\80	160	4000	2862
		B-UE-45	TAEM-13-8	13	82\65	160	4000	2862
			TAEL-13-8	13	110\82	160	4000	2862
			TAEM-16-7	16	92\65	160	4000	2862
			TAEL-16-7	16	102\92	160	4000	2862
			TAEM-17-7	17	80\65	160	4000	2862
			TAEL-17-7	17	107\80	160	4000	2862
	A35-30-15	BiL-1-17			125\95 (20 шт)	127 (10шт)	4000	2272
						108 (10шт)		1932
						100\95 (10 шт)		2272
						117 (10шт)		2093
			TWR-17-1	17	105\75 (20 шт)	97 (10шт)		1735
						117 (10шт)		2093
						126 (10шт)		2254
						107 (10шт)		1914
			TWR-17-1-F		121\95 (20 шт)	126 (10 шт)		2254
						100\95 (10 шт)		
Liston C 2203	SS-2-PL	BS-1PL	-	-	-	113	4000	2021
	S-4-250	B-US-65	TASM-13-14	13	85\65	182	3500	2493
			TASL-13-14	13	115\85	182	3500	2493
			TASM-16-12	16	85\65	182	3500	2493
			TASL-16-12	16	115\85	182	3500	2493
			TASM-17-12	17	85\65	182	3500	2493
			TASL-17-12	17	115\85	182	3500	2493
			TASL-17-8-F	17	121\85	182	3500	2493
			TASL-17-8-FQ	17	121\85	182	3500	2493
			TASM-21-7	21	85\65	182	3500	2493
			TASL-21-7	21	115\85	182	3500	2493
			TASM-26-5	25	85\65	182	3500	2493
			TASL-26-5	26	115\85	182	3500	2493
			TASL-26-5-FQ	26	115\85	182	3500	2493
			TASM-29-2	29	85\65	182	3500	2493
			TASL-29-2	29	115\85	182	3500	2493
			TASL-29-2 FQ	29	115\85	182	3500	2493
			TASM-31-2	31	85\65	182	3500	2493
			TASL-31-2	31	115\85	182	3500	2493
			TASM-34-2	34	85\65	182	3500	2493
			TASL-34-2	34	115\85	182	3500	2493
			TASM-38-2	38	85\65	182	3500	2493
			TASL-38-2	38	115\85	182	3500	2493
			TASM-44-1	44	85\65	182	3500	2493
			TASL-44-1	44	115\85	182	3500	2493
			TASL-45-1	45	115\80	182	3500	2493
			TASM-48-1	48	65\45	182	3500	2493
			TASL-48-1	48	115\65	182	3500	2493
			TASM-50-1	50	85\65	182	3500	2493
			TASL-50-1	50	115\85	182	3500	2493
			TASM-54-1	54	95	182	3500	2493
			TASL-54-1	54	96	182	3500	2493

			TASL-55-1	55	115\80	182	3500	2493
			TASL-56-1	56	115\85	182	3500	2493
			TASM-60-1	60	85\65	182	3500	2493
			TASL-60-1	60	115\85	182	3500	2493
			TWS-65-1	65	130\105	182	3500	2493
	Si-2-CC	B-1CC	TAR-17-1	17	163	92	3500	1260
			TAR-21-1	21	194	90	3500	1233
			TAR-28-1	28	114	138	3500	1890
			TAR-32-1	32	154	158	3500	2164

Примечание: Вычисление значений единиц относительного центробежного ускорения на рабочих частотах установленного ротора производится по формуле:

$$ОЦУ=1,118 \times R \times (N/1000)^2$$

где R - радиус центрифугирования, в миллиметрах,

N – установленная частота вращения ротора, в оборотах в минуту, указанные в Таблице Д.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(Обязательное)

1. Перечень основных применяемых материалов:

Таблица Е.1

Наименование	Нормативно-технический документ
Сталь листовая холоднокатаная 08пс	ГОСТ 19904-90
Сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т	ГОСТ 5582-75
Алюминий листовой АД1	ГОСТ 21631-76
Алюминиевый прокат – круг Д16Т, Д16	ГОСТ 21488-76
Сталь инструментальная нержавеющая 40Х13	ГОСТ 5632-72
Полипропилен листовой	ГОСТ 26996-86.
Полиацеталь ПОС-С	ТУ СТО-002-17152852-2011
Полипропилен, гранулы	ТУ 20.16.51-136-05766801-2015
Термоэластопласты, гранулы	ГОСТ ISO 2781-2013
Пластик листовой АБС/ПММА	ТУ 2246-009-06417304-2019
Полиэфирная порошковая краска	ТУ 2329-001-73039694-2016
Пластик АБС-2020-31, светло-серый	ТУ6-05-1587-84
Поликарбонатная (РС) термопластичная пленка	CAS 24936-68-3

2. Перечень материалов, вступающих в непосредственный или опосредованный контакт с организмом человека при эксплуатации:

Таблица Е.2

Наименование	Нормативно-технический документ	Изготовитель/поставщик
Пластик АБС формованный	ТУ 2246-009-06417304-2019	ООО «Вист-Сервис»
Поверхности, покрытые полиэфирной порошковой краской	ТУ 2329-001-73039694-2016	ООО «Порошковые покрытия Черноземья»
Полипропилен формованный	ТУ 20.16.51-136-05766801-2015	ООО "ТД Полипластик"

Сталь нержавеющая 12X18H10T	ГОСТ 5632-72	ООО «Сервисный металлцентр «Сталькор», ООО «Салют Сталь»
Термоэластопласт формованный	ГОСТ ISO 2781-2013	ООО «НПП Симплекс»

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(Справочное)

Перечень средств испытаний и измерений.

Перечень средств испытаний и измерений, применяемых для контроля Центрифуг.

Таблица Ж.1

Наименование и условное обозначение	Используемые параметры (характеристики)
Весы для статического взвешивания	Предел измерений 200 кг, цена деления 0,1 кг
Рулетка измерительная ЗПК2-10АНТ10	Предел измерений 5000 мм, цена деления 1 мм
Дальномер лазерный Leica DISTO D5	Пределы измерений – от 0 до 180; предел допускаемой погрешности ± 3
Шумомер ВШВ-003	Диапазон измерений от 22 до 140 дБ
Регулятор напряжения ЛАТР -1М	Предел регулирования от 0 до 300 В
Амперметр ГОСТ 8711	Диапазон измерений от 0 до 5 А; кл. 1,5
Трехфазный счетчик Меркурий 230 AR-01 R	Класс точности 1
Вольтметр переменного тока	Предел измерений 300 В 4 класс 1,5
Секундомер СОП пр-2а-3 ГОСТ 5072	Класс точности 3
Универсальная пробойная установка	Испытательное напряжение от 0 до 10 кВ
Термовлагокамера	Диапазон температур от минус 50 до +50, допустимые отклонения от установленного значения ± 3 С; диапазон относительной влажности от 10 до 95%, допустимые отклонения от установленного значения $\pm 3\%$
Стенд имитации транспортной тряски	Погрешность воспроизведения ускорения от минус 10% до +25%
Стенд проверки вибропрочности	Диапазон частот от 10 до 55 Гц
Стенд для проверки ударопрочности	Пиковое ударное ускорение 100 мс
Барометр-анероид специальный БАММ-1 ТУ25-04-1513	Диапазон измерений от 80 до 106 кПа
Психрометр аспирационный электрический М-34 ТУ25 -16-7.054	Диапазон измерений от 10% до 100%

Примечание – Допускается применение других средств измерений и испытательного оборудования, имеющих аналогичные метрологические и технические характеристики.

Подпись и дата

Инв.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЦМ.012.000.000 РЭ

Лист


49

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ[illegible]

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО, СКРЕПЕНО ПЕЧАТЬЮ

50 листа (ов)

Директор ООО «Листон»

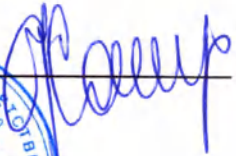 /Сапрыгин С.Н./




LISTEN

Директор ООО «Листон»

10 января 2023 г.



Руководство по эксплуатации
ЦМ.015.000.000 РЭ

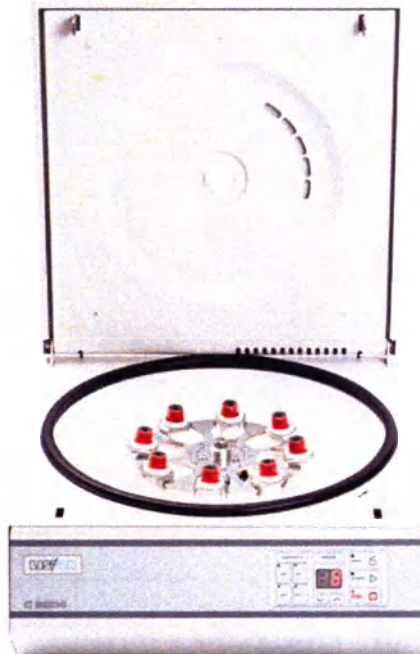

Калужская область
г. Жуков
2023 г.

в. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №

ДАННЫЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Тип и обозначение: Центрифуга лабораторная медицинская
Модель: Liston C 2204 Classic
Заводской номер: _____
Дата изготовления: _____
Комплектность _____
Ротор: _____
Бакеты: _____ шт.
Адаптеры: _____ шт.

Наименование изготовителя: ООО «Листон»
Адрес: 249191, Российская Федерация, Калужская область,
Жуковский район, г. Жуков, ул. Сельхозтехника, д. 15
Телефон / факс: +7 (800) 350-40-41, (484) 397-22-23
Сайт, e-mail: www.liston.ru, info@liston.ru
общие вопросы: _____
технические вопросы: _____
сервисный центр: _____

Центрифуга соответствует
ТУ 9443-001-89699725 – 2021 и
признана годной к эксплуата-
ции

штамп ОТК

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационное удостоверение:	
Выдано:	
Центрифуга соответствует требо- ваниям нормативных документов:	ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ ИЕС 61010-1-2014, ГОСТ ИЕС 61010-2-020-2013, ГОСТ Р МЭК 62304-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

СОДЕРЖАНИЕ

1	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	4
2	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	5
3	НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	11
4	ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
5	КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	20
6	УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	21
7	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	27
8	ХРАНЕНИЕ.....	28
9	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.....	28
10	УТИЛИЗАЦИЯ.....	30
11	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	30
12	ХАРАКТЕРНЫЕ НЕПОЛАДКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	31
	<u>ПРИЛОЖЕНИЕ А</u> БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ КОДИРОВКА НАИМЕНОВАНИЙ РОТОРОВ, БАКЕТОВ И АДАПТЕРОВ	33
	<u>ПРИЛОЖЕНИЕ Б</u> СООТВЕТСТВИЕ БУКВЕННО-ЦИФРОВОЙ КОДИРОВКИ РОТОРОВ, БАКЕТОВ И АДАПТЕРОВ ОБОЗНАЧЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИЙ.....	35
	<u>ПРИЛОЖЕНИЕ В</u> МАКСИМАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРИФУГ.....	35
	<u>ПРИЛОЖЕНИЕ Г</u> МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЪЕМНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ И ВЕС ЗАГРУЗКИ РОТОРОВ И БАКЕТОВ.....	35
	<u>ПРИЛОЖЕНИЕ Д</u> МАКСИМАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКЕТОВ И АДАПТЕРОВ.....	36
	<u>ПРИЛОЖЕНИЕ Е</u> . ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	37
	<u>ПРИЛОЖЕНИЕ Ж</u> . ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ.....	38
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	39

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Самойлова Е	10.01.23		10.01.23
Проверил	Самойлова Е	10.01.23		10.01.23
Зав.НИЛ				
Н.контр.	Мельникова А.Ю.	10.01.23		10.01.23

ЦМ.015.000.000 РЭ

Центрифуга лабораторная медицин-
ская Liston C 2204 Classic
по ТУ 9443-001-89699725 – 2021
Руководство по эксплуатации

Литера	Лист	Листов
	3	39

ООО «Листон»

1 ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1.1 Использование данного Руководства по эксплуатации

1.1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации (в дальнейшем Руководство) распространяется на Центрифугу лабораторную медицинскую настольную Liston С 2204 Classic по ТУ 9443-001-89699725 – 2021 (далее по тексту- Центрифуга).

1.1.2 Перед первым вводом в эксплуатацию или перед использованием Центрифуги внимательно и полностью прочитайте настоящее Руководство и точно следуйте его указаниям, ознакомьтесь с принципом работы устройства. Соблюдайте инструкции по использованию принадлежностей.

1.1.3 Руководство содержит всю необходимую информацию по транспортированию, установке, использованию в соответствии с назначением, технике безопасности и мерах предосторожности при работе и техническом обслуживании Центрифуги.

Руководство является частью прибора и должно рассматриваться как неотъемлемая часть Центрифуги и должно быть всегда доступно и находиться в распоряжении персонала лаборатории. Его следует хранить в легкодоступном месте.

При передаче прибора третьим лицам следует приложить к нему руководство по эксплуатации.

Помните, что нарушение правил эксплуатации и проведения работ может привести к лишению права на бесплатный гарантийный ремонт!

1.1.4 Руководство выполнено в соответствии с ГОСТ Р 2.610-2019, ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ IEC 82079-1-2014, ГОСТ Р 56018-2014/ISO/IEC Guide 37:2012, ГОСТ Р 54329-2011, ГОСТ Р 2.105-2019.

Термины и определения – по ГОСТ Р МЭК/ТО 60788-2009, ГОСТ 31508-2012, ГОСТ Р 52002-2003, ГОСТ 18322-2016, ГОСТ 27.002-2015, ГОСТ 25866-83, ГОСТ 33647-2015, ГОСТ Р 50267.0-92 и ГОСТ Р 2.610-2019.

1.1.5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению технических характеристик, товарного вида и удобства использования Центрифуги.

Ваши замечания по улучшению конструкции и удобству эксплуатации просим присылать на указанный выше адрес предприятия-изготовителя.

1.2 Символы предостерегающие и предупреждающие об опасности



1.2.1 **ВНИМАНИЕ!** Предупреждение о потенциальном риске и нанесении ущерба здоровью. Прочтите данный пункт очень тщательно и неукоснительно его выполняйте, он связан с вашей безопасностью!



1.2.2 **ОПАСНОСТЬ!** Риск удара током и серьезного ущерба здоровью и возможной угрозы жизни.



1.2.3 **ОПАСНОСТЬ!** Биологическая опасность с потенциальным риском для здоровья и, как следствие, возможной угрозы жизни.



1.2.4 **ОПАСНОСТЬ!** Риск взрывоопасности с потенциальным риском для здоровья и, как следствие, возможной угрозы жизни



2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



2.1 Требования к помещению, рабочему месту и квалификации пользователя:

2.1.1 Обеспечьте нормальные условия окружающей среды для эксплуатации Центрифуги:

- закрытое лабораторное помещение, инкубатор или холодную комнату, с хорошей естественной вентиляцией или в зоне работы вытяжки;
- работу на высоте до 2000 метров над уровнем моря;
- температуру воздуха от 10°C до 35°C,
- максимальную относительную влажность воздуха 80% для температуры до 31°C, с линейным уменьшением относительной влажности до 50% при увеличении температуры до 40°C, без образования конденсата.

2.1.2 Не используйте Центрифугу вне помещений.

2.1.3 Проверьте с помощью специалистов надежность контура заземления оборудования лаборатории для исключения опасности электротравм.

2.1.4 Обеспечьте прочный рабочий стол с прямой поверхностью.

2.1.5 Не располагайте центрифугу около радиатора и в месте попадания солнечных лучей.

2.1.6 Не используйте Центрифугу в непосредственной близости от другого оборудования и не устанавливайте в несколько уровней с другим оборудованием в связи с риском возникновения электромагнитных помех.

2.1.7 Обеспечьте (в соответствии с ГОСТ IEC 61010-2-020) ЗАЗОР РАБОЧЕЙ ЗОНЫ со всех сторон Центрифуги не менее 300 мм.

Примечание: ЗАЗОР РАБОЧЕЙ ЗОНЫ (CLEARANCE ENVELOPE)-пространство вокруг Центрифуги, необходимое для обеспечения безопасности.

2.1.8 Проведите специальные мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц в рабочую зону Центрифуги во время ее работы.

2.1.9 Обеспечьте безопасную эксплуатацию и обслуживание Центрифуги только специально обученным квалифицированным персоналом, изучившим данное Руководство, имеющим опыт в эксплуатации медицинского лабораторного оборудования, прошедшим инструктаж по технике безопасности и освоившим управление Центрифугой. Не доверяйте производство работ случайным людям, избегайте самостоятельных неквалифицированных действий!

2.1.10 Обеспечиваемая оборудованием защита может оказаться неэффективной, если эксплуатация прибора не соответствует требованиям изготовителя.



2.2 Условия и ограничения при применении Центрифуги по назначению

2.2.1 Используйте Центрифугу только в соответствии с Руководством по эксплуатации и только по назначению.

2.2.1 Включайте Центрифугу только в том случае, если сам прибор и сетевой кабель исправны.

2.2.2 Выдержите Центрифугу при комнатной температуре в течение 2-3 часов после транспортировки или хранения на складе, перед подключением к электрической сети. Перемена места расположения Центрифуги с холодного на теплое приведет к конденсации воды в центрифуге. Важно дать время для просушки Центрифуги перед повторением процедуры.

2.2.3 Оберегайте Центрифугу от ударов и падений. Не используйте Центрифугу и ее составные части в случае падений или видимых повреждений, а также в случае других неисправностей.

2.2.4 Не находитесь внутри зазора рабочей зоны, дольше чем необходимо по рабочим причинам.

2.2.5 Не оставляйте работающую Центрифугу без присмотра.

2.2.6 Не перемещайте и не подталкивайте Центрифугу во время работы. При ударе ротора о стенку камеры сильно повреждается устройство и сам ротор.

2.2.7 Не прислоняйтесь к Центрифуге во время ее работы.

2.2.8 Не храните потенциально опасные материалы в пределах зазора рабочей зоны.

2.2.9 Не используйте Центрифугу в агрессивной или взрывоопасной среде. Центрифуга не является ни инертной, ни взрывозащищенной.

2.2.10 Не проводите самостоятельных модификаций Центрифуги.

2.2.11 Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары, приобретенные у производителя или его официального представителя.

2.2.12 Осуществляйте транспортировку и хранение Центрифуги только в горизонтальном положении согласно маркировке на коробке.

2.2.13 **Выключите или прервите электроснабжение Центрифуги и немедленно покиньте зону ее расположения при возникновении любой опасной ситуации.**



2.3 Меры безопасности по электромагнитной совместимости

2.3.1 Не устанавливайте Центрифугу вблизи источников сильного электромагнитного излучения, так как они могут нарушить ее нормальное функционирование.

2.3.2 Не используйте Центрифугу при наличии вблизи неё синтетических материалов (синтетической одежды, покрытий и т.п.) при низкой относительной влажности воздуха. Это может привести к сбоям в работе из-за влияния электростатических разрядов.

2.3.3 Требования электромагнитной совместимости

2.3.3.1 Изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 «Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования».

2.3.3.2 Изделие предназначено для использования в базовой электромагнитной обстановке (обстановка, существующая в местах с электроснабжением непосредственно от распределительной сети низкого напряжения до 1000 В).

2.3.3.3 Требования помехоустойчивости оборудования, предназначенного для использования в базовой электромагнитной обстановке, перечислены в таблице 1:

Таблица 1

Порт	Наименование электромагнитной помехи	Стандарт ЭМС	Значение параметра испытаний	Критерий качества функционирования
Порт корпуса	Электростатический разряд	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 30804.4.2-2013	4 кВ (контактный разряд) 8 кВ (воздушный разряд)	В В
	Электромагнитное поле	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 30804.4.3-2013	10 В/м (от 80 МГц до 1000 МГц) 3 В/м (от 1,4 ГГц до 2,0 ГГц) 1 В/м (от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц)	А А А
	Электромагнитное поле промышленной частоты	ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 61000-4-8-93)	30 А/м (50 Гц)	А
	Провалы напряжения	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 30804.4.11-2013	0% (1 период) 40% (10 периодов) 70% (25 периодов)	В В С
Порт электропитания переменного тока (включая порты защитного заземления)	Кратковременные прерывания напряжения электропитания	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 30804.4.11-2013	0% (250 периодов)	С
	Наносекундные импульсные помехи	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 30804.4.4-2013	2 кВ (5/50нс, 5 КГц)	В
	Микросекундные импульсы большой энергии	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 51317.4.5-99	1,0 кВ (линия-линия) 2,0 кВ (линия земля)	В
	Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными полями	ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ 51317.4.6-99	3 В (от 0,15 МГц до 80 МГц)	А

2.3.3.4 Спецификация критериев качества функционирования:

Таблица 2

Критерий качества функционирования	Описание критерия качества функционирования
А	Оборудование должно продолжать функционировать в соответствии с назначением во время и после проведения испытания. Не допускается ухудшение характеристик функционирования или потеря функций ниже уровня качества функционирования, предусмотренного в технической документации изготовителя на оборудование, при использовании оборудования по назначению.
В	Оборудование должно продолжать функционировать в соответствии с назначением после проведения испытания. Не допускается ухудшение характеристик функционирования или потеря функций ниже уровня качества функционирования, предусмотренного в технической документации изготовителя на оборудование, при использовании оборудования по назначению. Во время проведения испытания допускаются незначительное ухудшение характеристик функционирования оборудования. Не допускается изменение фактического рабочего состояния или сохраненных данных.
С	Допускается временная потеря функций при условии, что функция может восстановиться самостоятельно или при работе средств управления.

2.3.3.5 Требования к электромагнитной эмиссии:

Изделие соответствует требованиям СИСР 11 для оборудования класса А. группы 1;

Изделие соответствует требованиям МЭК 61000-3-2 для изделий класса А;

Изделие соответствует требованиям МЭК 61000-3-3.



2.4 Источники риска при использовании Центрифуги по назначению



2.4.1 Опасность неправильного применения

2.4.1.1 Не включайте Центрифугу с установленными транспортировочными винтами, это может привести к ее повреждению.

2.4.1.2 Не производите включение и выключение электропитания Центрифуги несколько раз подряд. Это может вызвать повреждение электроники прибора.

2.4.1.3 Не эксплуатируйте роторы, бакеты или адаптеры с видимыми следами коррозии или механических повреждений. Проверяйте регулярно их состояние.

2.4.1.4 Убедитесь, перед началом работы, что ротор надежно закреплен на валу гайкой крепления. Затяните, при необходимости, гайку ключом. Если при запуске центрифуги появляются необычные шумы, это означает, что ротор или его крышка закреплены неправильно. Немедленно остановите центрифугу.

2.4.1.5 Загружайте роторы симметрично, используя одинаковые пробирки. Загружайте адаптеры только подходящими пробирками. Всегда используйте пробирки одинакового типа (вес, материал, плотность и объем). Проверяйте симметричность загрузки путем

уравновешивания используемых адаптеров и пробирок с помощью весов.

2.4.1.6 Не загружайте ротор центрифугируемым материалом свыше величин, промаркированных на роторе и/или бакете. С максимальным числом оборотов, объемом наполнения и загрузкой центрифуга рассчитана на центрифугирование проб с плотностью максимум $1,2 \text{ г/см}^3$. Убедитесь, что плотность центрифугируемого материала не превышает указанную величину.

2.4.1.7 Не используйте пробирки, не предназначенные для центрифугирования. Используйте только те пробирки, которые по информации производителя подходят для требуемых значений ускорения g (ОЦУ).

2.4.1.8 Не наполняйте пробирки после их установки в ротор.

2.4.1.9 Убедитесь, в случае использования пробирок с завинчивающимися крышками, что крышки тщательно завинчены. Неплотно завинченные крышки в процессе центрифугирования могут быть сорваны.



2.4.2 Опасность поражения электрическим током:

2.4.2.1 Подключайте Центрифугу только к электрической сети, напряжение и частота которой соответствуют указанным на шильдике (табличке с серийным номером на задней стенке Центрифуги). Используйте только сетевой кабель из комплекта поставки.

2.4.2.2 Не подключайте Центрифугу к электрической сети без заземления, а также не используйте удлинитель без заземления.

2.4.2.3 Убедитесь, что корпус центрифуги закрыт и не имеет повреждений. Открывать корпус разрешается только авторизованной сервисной службе. При открытом корпусе возможно прикосновение к деталям, находящимся под высоким напряжением, что может привести к поражению электрическим током. Удар электрическим током приводит к травме сердца и параличу дыхания.

2.4.2.4 Отключите Центрифугу от электрической сети при необходимости перемещения прибора. Для отключения Центрифуги от сети, выключите прибор и отсоедините контактную вилку сетевого кабеля прибора от сетевой розетки.

2.4.2.5 Не допускайте попадания любой жидкости внутрь Центрифуги (включая отверстия для кронштейнов электрозамка). В случае попадания жидкости, отключите Центрифугу от сети и не включайте до прихода специалиста по обслуживанию и ремонту. Уберите все осколки стеклянной или пластиковой пробирки из камеры, если пролив жидкости произошел из-за разрушения пробирки. Тщательно очистите прибор и принадлежности в соответствии с указаниями по очистке и дезинфекции, приведенными в данном Руководстве.

2.4.2.6 Убедитесь, что сетевой выключатель или розетка легко доступны во время эксплуатации Центрифуги.



2.4.3 Опасность травмирования вращающимся ротором

2.4.3.1 Дождитесь полной остановки ротора перед аварийным разблокированием крышки Центрифуги. При аварийной остановке ротор может вращаться еще несколько минут.

2.4.3.2 Используйте для проверки смотровое окно в крышке Центрифуги.

2.4.3.3 Не используйте аварийную разблокировку крышки без надобности. Используйте

только в крайнем случае, например, при прекращении подачи электроэнергии, для извлечения проб из Центрифуги.



2.4.4 Опасность травмирования при химическом, термическом или механическом повреждении используемых принадлежностей.

2.4.4.1 Проверяйте перед каждым использованием принадлежности на наличие повреждений. Даже небольшие царапины и трещины могут привести к сильным внутренним повреждениям материала, разрушению принадлежностей при центрифугировании и повреждении самой Центрифуги.

2.4.4.2 Защищайте все детали принадлежностей от механических повреждений. Заменяйте поврежденные принадлежности. Не используйте принадлежности, если их максимальный срок службы уже превышен.

2.4.4.3 Не используйте поврежденные пробирки. Убедитесь в отсутствии их повреждений перед центрифугированием. В противном случае возможны повреждения Центрифуги и ее принадлежностей, а также потеря проб.

2.4.4.4 Учитывайте информацию производителя, касающуюся химической устойчивости пробирок. При использовании органических растворителей (например, фенола или хлороформа) снижается прочность пластиковых пробирок, в результате чего возможно их повреждение.

2.4.4.5 Учитывайте снижение устойчивости пробирок к центрифугированию. Пробирки нагреваются. В центрифугах без охлаждения, в зависимости от продолжительности работы, ускорения g (ОЦУ) / числа оборотов и температуры окружающей среды, камера ротора, сам ротор и проба могут нагреться до 40 °C и выше. Учитывайте термостойкость проб.



2.4.5 Опасность травмирования при открывании и закрывании крышки.

2.4.5.1 Не беритесь рукой за участок между крышкой Центрифуги и ее корпусом при открывании или закрывании крышки.

2.4.5.2 Открывайте крышку Центрифуги полностью, чтобы зафиксировать крышку от закрывания.

2.4.5.3 Не беритесь рукой за блокирующий механизм крышки центрифуги.



2.4.6 Опасность при центрифугировании материалов из группы повышенного риска.

2.4.6.1 Не центрифугируйте взрывоопасные и горючие материалы и материалы с бурной химической реакцией. Не применяйте Центрифугу во взрывоопасном окружении.

2.4.6.2 Не используйте агрессивные вещества, например сильные и слабые щелочи, сильные кислоты, растворы с ионами ртути, меди и других тяжелых металлов, галогенированные углеводороды, концентрированные солевые растворы и фенол. Роторы представляют собой высококачественные конструктивные элементы, выдерживающие экстремальные нагрузки. Эту устойчивость могут снизить агрессивные вещества.

2.4.6.3 Не центрифугируйте токсичные или радиоактивные материалы без соответствующих систем безопасности. Предусматривайте несколько мер безопасности. Пользователь

несет ответственность за обезвреживание опасных материалов, пролитых на прибор или попавших внутрь прибора.



2.4.7 Опасность взрыва

2.4.7.1 Не эксплуатируйте Центрифугу в помещениях, где проводится работа со взрывоопасными веществами.

2.4.7.2 Не используйте Центрифугу для работы со взрывоопасными или высокоактивными химическими реагентами.

2.4.7.3 Не используйте Центрифугу для работы с веществами, которые могут создать взрывоопасную атмосферу. Окончательное решение в отношении рисков, связанных с использованием таких веществ, принимает пользователь.



2.4.8 Опасность при центрифугировании микробиологических проб

2.4.8.1 Придерживайтесь стандартных рабочих процедур, установленных в лаборатории, при работе с биологическими материалами. Соблюдайте общие меры предосторожности при работе с центрифугой.

2.4.8.2 Соблюдайте правила надлежащей лабораторной практики, а также лабораторные процедуры, регламентирующие использование индивидуальных средств защиты (лабораторных халатов, перчаток и средств защиты глаз).

Все поверхности прибора должны считаться потенциально биологически опасными, а работа с ними должна выполняться с осторожностью согласно стандартным рабочим процедурам, установленным в лаборатории.

2.4.8.3 Применяйте аэрозоленепроницаемые биологические уплотнители крышек при центрифугировании микробиологических проб группы риска II (согласно ГОСТ IEC 61010-2-020). Без уплотнителя крышки Центрифуга не является биологически безопасной системой.

2.4.8.4 Проведите комплекс дезинфекционных мероприятий при попадании токсинов или патогенных субстанций в Центрифугу или ее компоненты.

3 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Центрифуга предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до $1,2 \text{ г/см}^3$ в поле центробежных сил и применяется в практике клинической лабораторной диагностики, в лабораториях поликлиник, больниц.

3.2 Центрифуга обеспечивает возможность центрифугирования жидких систем, с неуравновешенностью масс в пробирках до 2,0 г.

3.3 Центрифуга представляет собой медицинское неинвазивное изделие длительного применения, полной заводской готовности, включающее в себя все необходимые для обеспечения надёжного функционирования устройства контроля и управления.

3.4 Классификация Центрифуги:

а) по коду ОКПД 2 – 28.29.41.110;

б) по виду медицинского изделия, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 260430 «Центрифуга общего назначения ИВД»;

в) в зависимости от потенциального риска применения – класс 2а (согласно Номенклатурной классификации МИ, утвержденной Приказом Минздрава России от 06.06.2012 г. № 4н) и по ГОСТ 31508;

г) по воспринимаемым механическим воздействиям – группа 2 по ГОСТ Р 50444;

д) при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

е) по электромагнитной совместимости – соответствует ГОСТ Р МЭК 61326-1;

ж) по уровню промышленных радиопомех – не превышают значений, устанавливаемых ГОСТ Р 51318.11.

з) по типу размещения – настольная, закрытая;

и) по режиму работы – автоматическая, повторно-продолжительного действия;

3.5 Пример записи Центрифуги при заказе и в другой документации: «Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2204 Classic ТУ 9443-001-89699725-2021».

4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Центрифуга соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ IEC 61010-1-2014; ГОСТ IEC 61010-2-020-2013; ГОСТ Р МЭК 62304-2013; ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ТУ 9443-001-89699725-2021.

4.2 Центрифуга изготовлена и проверена в соответствии с комплектом конструкторской документации:

- Liston C 2204 Classic по ЦМ.015.000.000;

4.3 Центрифуга оснащена программным обеспечением по ГОСТ Р МЭК 62304-2013, ГОСТ Р 55544-2013 и ГОСТ ISO 14971-2011, выполняющим функции:

- реализации и контроля заданных режимов работы;
- отображения состояния и параметров работы;
- выполнения заданных алгоритмов;
- оперативного управления;
- регистрации аварийных событий;

4.4 Основные технические характеристики Центрифуги приведены в Таблице 3:

Таблица 3

Наименование параметра	Значения
Внешний вид, качество сборки	В соответствии с рабочими чертежами, наличие дефектов не допускается
Номинальное напряжение питающей однофазной сети, В	230
- с допустимым отклонением, В	±23
Частота переменного тока питающей сети, Гц	50
- с допустимым отклонением, Гц	± 0,5
Ток в установившемся режиме, потребляемый центрифугой, А, не более	1,35

Полная (кажущаяся) мощность в установившемся режиме, В·А, не более	330
Установка и светодиодное отображение выбранной частоты вращения ротора, об/мин	1000, 1500, 2000, 2800
Предел допускаемого отклонения частоты вращения ротора от заданного значения, об/мин., не более	± 100
Время непрерывной работы, мин - с последующим перерывом, мин, не менее Режим эксплуатации общий. Периоды действия и ожидания чередуются случайным образом.	180 60
Время выхода на рабочий режим после включения (достижения установившегося режима), мин., не более	2
Обеспечиваемая установка и отображение интервала времени центрифугирования, мин. - с дискретностью, мин*	1- 99 1
Пределы допускаемого отклонения от заданного значения интервала времени, %, не более	± 1
Длительность сигнала, с - предупреждающего; - аварийного; - для снятия аварийного режима	$\sim 0,3$ $\sim 1,0$ $\sim 1,5$
Корректированный уровень звуковой мощности при измерительном расстоянии 1 метр, дБ·А, не более	60
Корректированный уровень звуковой мощности однократного короткого (предупреждение), однократного длинного (авария, ошибка) и трехкратного (окончание процесса) звукового сигнала при измерительном расстоянии 1 метр, дБ · А, не менее,	70
Средний срок службы Центрифуги, лет, не менее	5
Время остановки ротора при плавном торможении секунд, не более	50
Время аварийного торможения ротора, секунд, не более	20
Допустимая температура окружающей среды, °С	от +10 до +35
Масса конструкционная, кг **	18,4 $\pm$ 1

Габаритные размеры (ширина × глубина × высота), мм

(411±5)×(480±5)×(221±5)

П р и м е ч а н и я:

1 *Последняя минута текущего интервала времени, оставшаяся до торможения ротора, должна отображаться в секундах

2 **Без роторов и принадлежностей

3 Изготовитель оставляет за собой право изменения и уточнения приведенных в таблице 1 характеристик в соответствии с требованиями конструкторской документации на конкретную модификацию Центрифуги.

4.5 Центрифуга Liston C 2204 Classic обеспечивает установку и текущую частоту вращения ротора в оборотах в минуту - 1000 , 1500, 2000, 2800 об/мин и обеспечивает предел допускаемого отклонения частоты вращения ротора от заданного значения не более ± 100 об/мин.

Примечание: Вычисление значений единиц относительного центробежного ускорения на рабочих частотах установленного ротора производится по формуле:

$$ОЦУ=1,118 \times R \times (N/1000)^2$$

где R - радиус центрифугирования, в миллиметрах,

N – установленная частота вращения ротора, в оборотах в минуту, указанных в Таблице Д.1 Приложения Д.

4.6 Центрифуга обеспечивает установку и отображение интервала времени центрифугирования на лицевой панели на цифровом 2-х разрядном индикаторе ВРЕМЯ от 1 до 99 минут с дискретностью 1 минута, пределы допускаемого отклонения от заданного значения -не более ± 1%. Последняя минута текущего интервала времени, оставшаяся до торможения ротора, отображается в секундах.

При пуске Центрифуги без установки интервала времени центрифугирования, на цифровом индикаторе отображается текущий интервал времени в минутах с момента достижения установленной частоты вращения Центрифуги, с отклонением не более ± 1% от фактического значения. При этом в правом нижнем углу цифрового индикатора постоянно горит точка.

4.7 Центрифуга обеспечивает выдачу однократного короткого предупреждающего звукового сигнала длительностью около 0,3 секунды при следующих действиях оператора:

- попытке увеличить или уменьшить значение числового параметра кнопками «V» и «Λ», если достигнуто граничное значение;
- попытке пуска Центрифуги нажатием кнопки СТАРТ при незафиксированном замке крышки;
- при попытке открыть крышку кнопкой ОТКР в режиме «СТОП», если программа обнаружила остаточное вращение ротора со скоростью более 500 об/мин.

4.8 Центрифуга имеет электронное устройство плавного торможения ротора по окончании процесса центрифугирования с возможностью его отключения и перехода в режим свободного выбега.

Время остановки ротора Центрифуги при плавном торможении не превышает 50 секунд.

Центрифуга обеспечивает отключение устройства плавного торможения ротора одно-временным нажатием на кнопки «V» и «Λ» у индикатора ВРЕМЯ, при этом между младшим и старшим разрядом индикатора должна загораться точка в мигающем режиме.

Обратное включение устройства плавного торможения ротора производится, по аналогии с отключением, одновременным нажатием на кнопки «V» и «Λ» у индикатора ВРЕМЯ.

4.9 Центрифуга имеет электронное устройство экстренного торможения при возникновении аварийной ситуации во время рабочего цикла:

- превышении установленного порога вибрации (дисбаланса) ротора;
- открывании крышки при вращающемся роторе;
- включении питания (после аварийного отключения сети) при остаточной частоте вращения ротора более 500 об/мин.

Время аварийного торможения не превышает 20 секунд.

При возникновении аварийной ситуации во время рабочего цикла звучит однократный звуковой сигнал длительностью около 1 секунды и включается аварийное торможение:

- индикатор СТОП должен горит в мигающем режиме;
- на индикаторе ВРЕМЯ выводятся символы «Er»;

После аварийного останова ротора на индикаторе ВРЕМЯ попеременно выводятся символы «Er» и символьное обозначение типа ошибки:

- «db» - превышение установленного порога вибрации (дисбаланса) ротора;
- «nr» - вращение ротора после включения питания (после аварийного отключения сети);
- «Ld» - замок открылся самопроизвольно, без команды.

Крышка в Центрифуге после аварийного останова не открывается автоматически и остается заблокированной, светодиодные индикаторы СТАРТ и СТОП синхронно мигают, обозначая аварийный останов и необходимость вмешательства оператора.

Для снятия аварийного режима необходимо нажать кнопку СТОП, при этом прозвучит троекратный сигнал общей длительностью не менее 1,5 секунды и индикатор СТОП загорится в постоянном режиме. Центрифуга перейдет в штатный режим СТОП.

4.10 Центрифуга обеспечивает повторяемость установленного режима работы (частоты вращения ротора, интервала времени центрифугирования, включения или отключения режима плавного торможения ротора) после полной остановки вращения ротора и открывании крышки, и после отключения сетевого питания при следующем пуске Центрифуги.

4.11 Центрифуга обеспечивает блокировку включения двигателя при открытой крышке и блокировку открывания крышки при работающем двигателе.

Крышка Центрифуги автоматически приоткрывается после выполнения рабочего цикла и плавного торможения или свободного выбега и остановки ротора, либо нажатием на кнопку ОТКР при неработающем двигателе. При открытой крышке горит индикатор ОТКР. Крышка Центрифуги открывается и закрывается вручную.

4.12 Средняя наработка Центрифуги на отказ - не менее 1500 ч. Критерием отказа является несоответствие требованиям п.п. 3.2, 4.5 – 4.11 настоящего Руководства по эксплуатации.

4.13 Средний срок службы Центрифуги - не менее 5 лет. Конструкция Центрифуги обеспечивает быструю разборку, сборку и легкий доступ к наиболее отказоспособным деталям

и сборочным единицам.

4.14 Максимальная температура наружных частей Центрифуг, доступных для прикосновения - не более 80°C при температуре окружающей среды 40°C.

4.15 Детали Центрифуги имеют защитные и защитно-декоративные покрытия:

- металлические и неметаллические неорганические - по ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации 1 ГОСТ 15150;

- лакокрасочные покрытия - по ГОСТ 9.401 для группы условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

Наружные поверхности Центрифуги имеют лакокрасочные покрытия не ниже III класса по ГОСТ 9.032.

4.16 Наружные покрытия Центрифуги устойчивы к дезинфекции химическими методами по МУ 287-113:

- обработка 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% процентного моющего средства по ГОСТ 25644.

4.17 Центрифуга в транспортной упаковке устойчива к воздействию климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.

4.18 Центрифуга обладает вибропрочностью при действии вибрационных нагрузок частотой (10-55) Гц и амплитудой перемещения 0,15 мм.

4.19 Центрифуга, упакованная в транспортную упаковку, сохраняет работоспособность после механических воздействий при транспортировании в соответствии с ГОСТ Р 50444:

а) вибрационная нагрузка амплитудой перемещения 0,35 мм в диапазоне частот от 10 до 55 Гц;

б) ударная нагрузка при пиковом ускорении 100 мс⁻², длительностью 16 мс.

4.20 Объемный электромонтаж Центрифуги соответствует ГОСТ 23592, жгуты и их крепления - соответствуют ГОСТ 23586.

4.21 Наружная поверхность корпуса Центрифуги должна быть гладкой, без вмятин, царапин и других дефектов, ухудшающих внешний вид.

4.22 Единая (включая экспорт) буквенно-цифровая кодировка для наименований роторов, бакетов и адаптеров, в которой технические параметры кодируются наборами букв и цифр, приведена в Приложении А.

Соответствие буквенно-цифровой кодировки роторов, бакетов и адаптеров обозначению основных конструкторских документов (спецификаций), по которым они изготовлены, приведены в Таблице Б.1 (Приложение Б).

Максимальные эксплуатационные характеристики Центрифуг приведены в Таблице В.1 (Приложение В.)

Максимальные объемная вместимость и вес загрузки роторов и бакетов приведены в Таблице Г.1 (Приложение Г).

Максимальные эксплуатационные характеристики бакетов и адаптеров приведены в Таблице Д.1 (Приложение Д).

Перечень основных применяемых материалов приведен в Таблице Е.1 (Приложение Е).

Перечень средств испытаний и измерений, применяемых для контроля Центрифуг при-
веден в Таблице Ж.1 (Приложение Ж).

4.23 Устройство Центрифуги Liston C 2204 Classic показано на Рисунке 1, где:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 – крышка; | 7 – амортизатор; |
| 2 – датчик оборотов; | 8 – электродвигатель; |
| 3 – вал двигателя; | 9 – основание (корпус); |
| 4 – ротор; | 10 – камера; |
| 5 – электромагнитный замок; | 11 – балансир (утяжелитель); |
| 6 – плата индикации и управления; | 12 – плата силовая; |

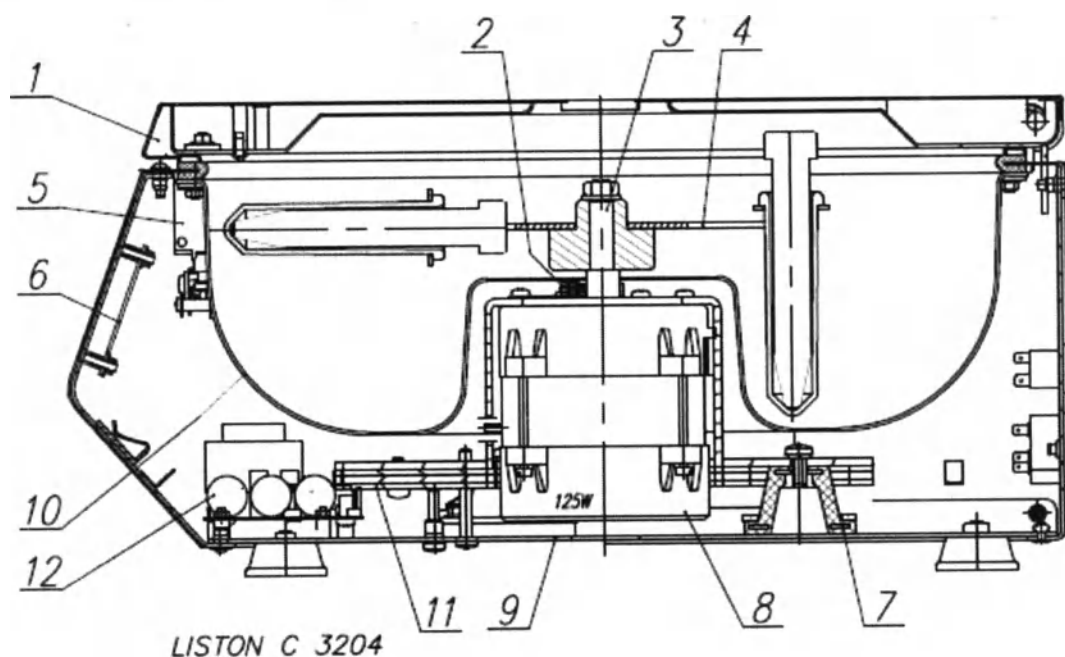


Рисунок 1. Устройство Центрифуги Liston C 2204 Classic.

4.24 Панель управления Центрифугой Liston C 2204 Classic показана на Рисунке 2, где:

- | |
|--|
| 1 – кнопка выбора скорости 1000; |
| 1 – светодиод индикации выбора скорости 1000; |
| 3 – кнопка выбора скорости 1500; |
| 4 – светодиод индикации выбора скорости 1500; |
| 5 – кнопка выбора скорости 2000; |
| 6 – светодиод индикации выбора скорости 2000; |
| 7 – кнопка выбора скорости 2800; |
| 8 – светодиод индикации выбора скорости 2800; |
| 9 – цифровой индикатор устанавливаемого и текущего интервала времени работы; |
| 10 – кнопка «V» уменьшения значения интервала времени работы; |
| 11 – кнопка «Λ» увеличения значения интервала времени работы; |
| 12 – кнопка открывания крышки ОТКР; |
| 13 – светодиод индикации открытой крышки ОТКР; |
| 14 – кнопка начала работы СТАРТ; |

- 15 – светодиод индикации работы СТАРТ;
- 16 – кнопка окончания работы СТОП;
- 17 – светодиод индикации торможения и окончания работы центрифуги СТОП;

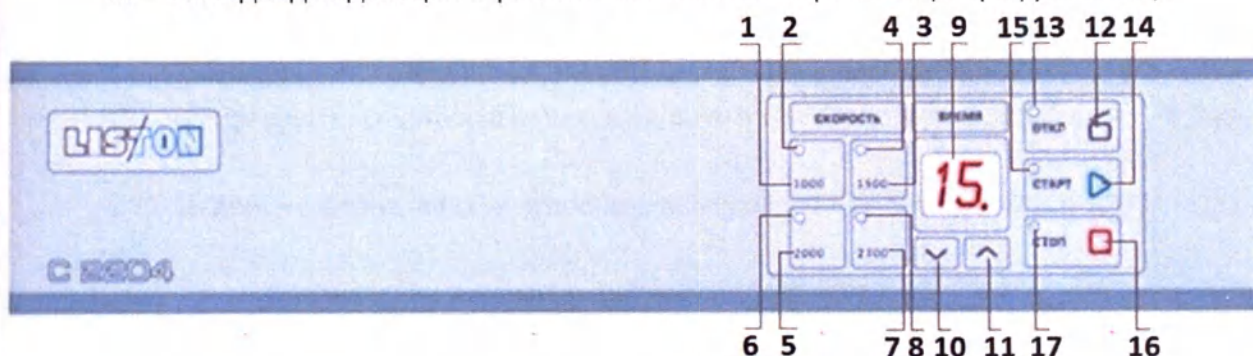


Рисунок 2. Панель управления Центрифугой Liston C 2204 Classic.

4.25 Применяемая вставка плавкая - ВПБ6-10 3,0 А (5x20 мм);

4.26 Маркировка Центрифуги на фирменной табличке (шильдике) приведена на Рисунке 3.



Рисунок 3. Маркировка Центрифуги на шильдике, где:

- 1 – наименование и изображение зарегистрированного торгового знака предприятия-изготовителя;
- 2 – наименование модели с обозначением технических условий, по которым изготовлена Центрифуга;
- 3 – страна производства;
- 4 – единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза (при наличии сертификата подтверждения соответствия);
- 5 – обозначение изделия в каталоге предприятия-изготовителя;
- 6 – номер изделия по системе нумерации предприятия -изготовителя;
- 7 – дата изготовления изделия;
- 8 – номинальное напряжение питания, В;
- 9 – максимальный потребляемый ток в установившемся режиме, А;

- 10 – номинальная частота питания, Гц;
- 11 – полная (кажущаяся) потребляемая мощность в установившемся режиме, В·А;
- 12 – максимальная скорость вращения ротора, Об/мин;
- 13 – максимальная плотность разделяемой неоднородной жидкой системы, Кг/дм³;
- 14 – максимальная кинетическая энергия, развиваемая ротором, Н·м;
- 15 – юридический и почтовый адрес предприятия изготовителя, телефон, сайт, e-mail.

4.27 Надписи (обозначения) и условные знаки, располагаемые на Центрифуге:



Обозначение клеммы защитного проводника;



Обозначение клеммы заземления;



230 В

Предупреждающий знак: «Внимание! Опасное напряжение 230 Вольт»;



Предупреждающий знак и надпись: «Внимание! Перед началом работы с устройством необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации»;

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
С УСТРОЙСТВОМ НЕОБХОДИМО
ОЗНАКОМИТЬСЯ С РУКОВОДСТВОМ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

для закрытия крышки НАЖАТЬ ЗДЕСЬ Надпись, обозначающая место нажима рукой для закрытия крышки;



Обозначение направления вращения ротора (против часовой стрелки);

**gG 3,15A 250B
5,2x20**

Маркировка устанавливаемой в держатель плавкой вставки общего назначения с отключающей способностью во всем диапазоне с указанием номинального тока, номинального напряжения и размеров (диаметр x длина)



Маркировка ротора, включающая в себя: зарегистрированный торговый знак изготовителя, наименование ротора, заводской номер ротора, цифровую идентификацию посадочных мест, совместимость с моделью центрифуги, максимальную загрузку ротора, максимальное ОЦУ, максимальную частоту вращения.



Маркировка бакета малого размера, включающая в себя: название модели бакета.

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1 Спецификация применяемости роторов, бакетов и адаптеров в Центрифуге приведена в Таблице 4.

Таблица 4

Наименование Центрифуги	Наименование ротора	Наименование бакета	Количество бакетов в роторе	Наименование адаптера	Количество адаптеров в роторе	Количество пробирок в роторе
Liston C 2204 Classic	Se-4-50	B-1-30	4	-	-	4
	S-8-15	B-1-17	8	-	-	8
				TWR-17-1	8	8
				TWR-16-1-F	8	8
	Se-12-15	B-1-17	12	-	-	12
				TWR-17-1	12	12
				TWR-16-1-F	12	12
	S-12-GCARD	B-1GCARD	12	-	-	-
	S-20-GCARD	B-1GCARD	20	-	-	-
	S-24-GCARD	B-1GCARD	24	-	-	-

5.2 Комплект поставки Центрифуги соответствует указанному в Таблице 5:

Таблица 5

Наименование	Обозначение документа	Кол-во, штук
1 Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2204 Classic в составе:		
1.1 Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2204 Classic	ТУ 9443-001-89699725 – 2021	1
1.2 Ротор – Se-4-50 (при необходимости);	ЦМ.015.209.000	1
1.3 Ротор – S-8-15 (при необходимости);	ЦМ.015.042.000	1
1.4 Ротор – Se-12-15;	ЦМ.015.040.000	1
1.5 Ротор – S-12-GCARD (при необходимости);	ЦМ.015.046.000	1
1.6 Ротор – S-20-GCARD (при необходимости);	ЦМ.015.046.000-02	1
1.7 Ротор – S-24-GCARD (при необходимости);	ЦМ.015.046.000-01	1
1.8 Бакеты – B-1-30 (при необходимости);	ЦМ.015.203.006	4
1.9 Бакеты – B-1-17;	ЦМ.014.184.006	Не более 12
1.10 Бакеты – B-1GCARD (при необходимости);	ЦМ.015.046.003	Не более 24
1.11 Адаптеры – TWR-17-1;	ЦМ.015.200.006	Не более 12

1.12 Адаптеры – TWR-16-1-F (при необходимости);	ЦМ.012.000.018-01	Не более 12
1.13 Сетевой шнур ПВС-АП S22C13 2.2 м;	ГОСТ 28244-96	1
1.14 <u>Принадлежности</u>		
1.14.1 Вставка плавкая ВПБ6-10 3,0 А	ОЮО.481.021 ТУ	1
1.15 <u>Эксплуатационная документация</u>		
1.15.1 Паспорт	ЦМ.012.000.000 ПС	1
1.15.2 Руководство по эксплуатации	ЦМ.015.000.000 РЭ	1

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Общие рекомендации

6.1.1 Эксплуатация должна осуществляться согласно СанПиН 2.1.3684-21 и ГОСТ ISO/ IEC 17025-2019 в чистых помещениях по ГОСТ ИСО 14644-1-2002, ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017, ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005 и ГОСТ Р 52539-2006.

6.1.2 Контроль биозагрязнений в лаборатории должен осуществляться по ГОСТ ИСО 14698-1-2005 и ГОСТ ИСО 14698-2-2005.

6.1.3 При работах с Центрифугой следует соблюдать указания ГОСТ Р 53079.4-2008, ГОСТ 27025-86, ГОСТ Р 52905-2007, ГОСТ 31891-2012 и «Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР», Москва, 1981 г.

6.1.4 Во время лабораторных работ следует пользоваться резиновыми перчатками по ГОСТ 20010-93, защитными очками и специальной лабораторной одеждой (халат, костюм или комбинезон).

6.1.5 Стерилизация Центрифуги во время ее эксплуатации не требуется.

6.1.6 Ручное перемещение Центрифуги, без укладки в упаковочный ящик либо транспортировочное средство, должно быть ограничено рабочей зоной, при этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить прибор.

6.1.7 В процессе эксплуатации Центрифуги необходимо обеспечить её содержание в исправном состоянии путем организации систематического технического обслуживания Центрифуги и ее составных частей. С этой целью должен быть назначен персонал, ответственный за организацию и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту.

6.1.8 Обслуживающий персонал должен знать устройство и правила эксплуатации Центрифуги, пройти проверку знаний по технике безопасности и быть допущенным к самостоятельной работе в установленном порядке.

6.1.9 После каждого рабочего сеанса необходимо проверять чистоту рабочего стола, тщательно очищать его, протирать стол, рабочую камеру и наружные поверхности Центрифуги отжатой салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе 3% перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 в соответствии с МУ 287-113.

6.2 Распаковка Центрифуги:

- осторожно извлеките Центрифугу в полиэтиленовом чехле из коробки (сохраните коробку на случай необходимости последующей транспортировки Центрифуги);
- извлеките Центрифугу из полиэтиленового чехла;

– откройте замок крышки Центрифуги оттягиванием шнурка с концевиком, установленном на днище центрифуги в передней части, вниз и извлеките комплект поставки (адаптеры, документацию и т.д.);

– отвинтите и удалите четыре транспортировочных винта, расположенных на днище Центрифуги (помечены красной краской). Для этого аккуратно поверните Центрифугу набок. Сохраните их для последующей транспортировки Центрифуги;

– осмотрите Центрифугу на предмет видимых повреждений;



– проверьте комплектность Центрифуги согласно п.5 данного Руководства или согласно паспорту Центрифуги.



6.3 Установка и подключение Центрифуги к сети:

- установите Центрифугу на устойчивую, чистую и ровную поверхность;
- убедитесь, что Центрифуга установлена по уровню и не раскачивается;
- убедитесь, что вентиляция устройства не перекрыта. Для этого необходимо установить Центрифугу таким образом, чтобы задняя стенка прибора с вентиляционными отверстиями была удалена не менее чем на 300 мм от стены (задней вертикальной части стола и т.п.);
- обеспечьте вокруг Центрифуги свободную зону (зону безопасности) не менее 300 мм со всех сторон. (Согласно ГОСТ IEC 61010-2-020-2011 на случай аварийной ситуации);
- выдержите Центрифугу не менее 2 (двух) часов в комнатных условиях, перед подключением к электрической сети, если Центрифуга находилась в условиях отрицательных температур;
- проверьте шильдик (табличка с серийным номером на задней стенке) Центрифуги и убедитесь, что маркированные на нем напряжение и частота соответствуют параметрам вашей электрической сети;
- проверьте ротор, адаптеры и сетевой шнур на предмет повреждений и замените их в случае необходимости;
- подключите Центрифугу к электрической сети;
- убедитесь, что ротор надежно закреплен контргайкой;
- убедитесь вручную, что ротор свободно вращается против часовой стрелки;
- если ротор необходимо установить (заменить на другой) – смотрите п.6.4 настоящего Руководства.
- загружайте ротор симметрично равным количеством пробирок с равным количеством (массой) центрифугируемого материала;
- убедитесь, что вы используете пробирки, предназначенные для центрифугирования;
- центрифугируйте пробирки ТОЛЬКО согласно инструкциям производителей пробирок;
- не превышайте НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ скоростные ограничения для данных пробирок;
- остановите немедленно Центрифугу нажатием кнопки СТОП, если в ходе разгона ротора услышите нехарактерные звуки;

6.4 Установка (замена) и загрузка ротора:

– убедитесь, что на роторе нет следов коррозии или механических повреждений. Никогда не используйте поврежденный ротор!

– установите аккуратно ротор на вал двигателя, держа его ДВУМЯ руками.

– убедитесь, что ротор параллелен горизонтальной оси Центрифуги (перпендикулярен валу двигателя);

– затяните контргайку ключом №13 по часовой стрелке;

– установите все бакеты и адаптеры в ротор, удерживая ротор одной рукой;

– установите пробирки в ротор согласно Рис. 4, Рис. 5 или Рис. 6 (в зависимости от вашего типа ротора);

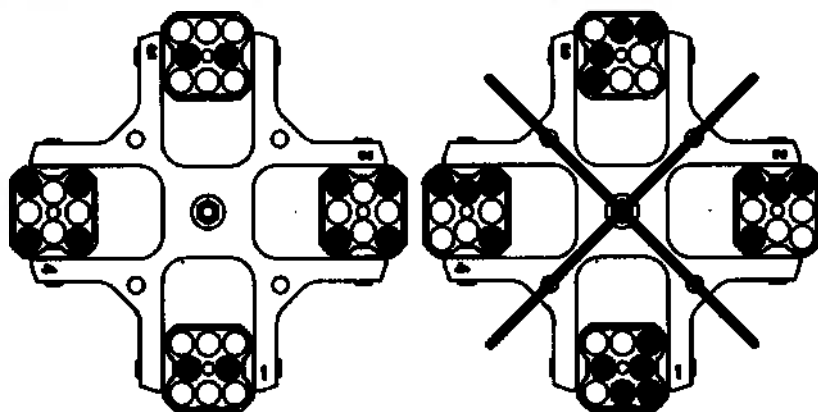


Рис. 4 Схема загрузки универсальных роторов-крестовин

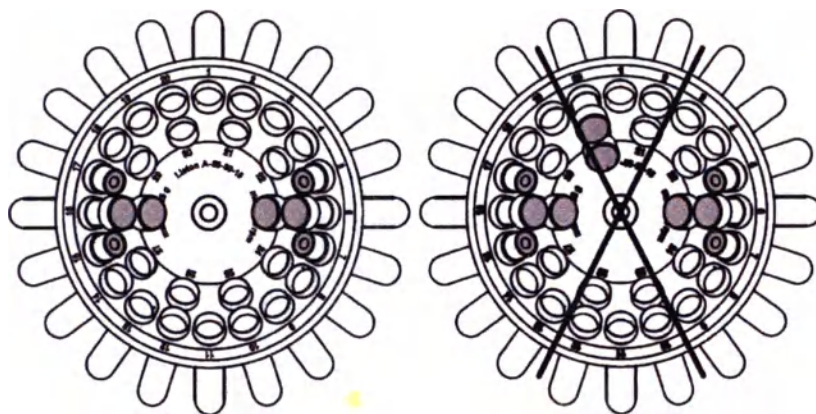


Рис. 5 Схема загрузки угловых роторов.

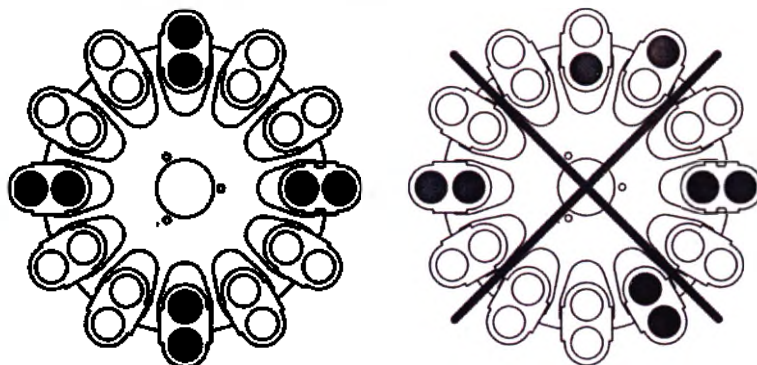


Рис. 6 Схема загрузки бакет-роторов.

6.5 Начало эксплуатации

6.5.1 В исходном состоянии выполните предписания по установке, подключению Центрифуги к сети и установке (загрузке) ротора согласно п. п. 6.3, 6.4 настоящего Руководства.

6.5.2 Загрузите ротор до номинального объема, закройте крышку и включите тумблер ВКЛ-ВЫКЛ, расположенный у Центрифуги сзади слева, в положение ВКЛ. При этом загорится индикатор, расположенный рядом с кнопкой СТОП поз.17 Рис. 2. Цифровой индикаторы поз.9 и один из светодиодов 1000 поз.2, 1500 поз.4, 2000 поз.6 или 2800 поз.8 Рис.2 высветят ранее используемый режим (последний рабочий режим перед выключением питания). Индикатор ОТКР поз.13 Рис.2 должен быть погашен.

Установите частоту вращения двигателя в ОБ/МИН согласно п.6.5.4.

Установите время центрифугирования согласно п.6.5.5.

Ознакомьтесь с особенностями работы Центрифуги согласно ниже следующих п.п. 6.5.6-6.5.11.

Включите Центрифугу согласно п.6.5.3.

6.5.3 Включение рабочего режима и остановка работы:

Нажать на кнопку СТАРТ поз.14 Рис.2, при этом индикатор СТОП поз.17 Рис.2 гаснет и загорается индикатор СТАРТ поз.15 Рис.2 в мигающем режиме, ротор начинает вращение и плавно выходит на заданную частоту вращения, светодиод выбранной скорости 1000 поз.2, 1500 поз.4, 2000 поз.6 или 2800 поз.8 Рис.2 отображает выбранную частоту вращения ротора.

После выхода Центрифуги на заданную скорость, индикатор СТАРТ поз.15 Рис.2 переходит в режим постоянного свечения, начинается отсчет времени работы Центрифуги в режиме таймера, либо прямого отсчета.

Последняя минута текущего интервала времени, оставшаяся до остановки Центрифуги, будет отображаться в секундах.

По истечении заданного времени, во время плавного торможения светодиод выбранной скорости 1000 поз.2, 1500 поз.4, 2000 поз.6 или 2800 поз.8 Рис.2 продолжает светиться постоянно, а светодиодный индикатор СТОП поз.17 Рис.2 светится в мигающем режиме.

После плавного торможения и остановки ротора (снижения скорости вращения ротора менее 50 об/мин), загорается индикатор СТОП поз.17 Рис.2 постоянно и включается звуковой сигнал (троекратное звучание), крышка разблокируется и приоткрывается.

После остановки ротора на цифровом индикаторе появится ранее установленное значения интервала времени и будет гореть светодиод скорости из памяти Центрифуги.

Остановить работу Центрифуги в любой момент можно, нажав на кнопку СТОП поз.16 Рис.2, при этом будет повторен вышеизложенный режим плавного торможения.

6.5.4 Установка частоты вращения двигателя:

При нажатии на лицевой панели на кнопки выбора скорости 1000 поз.2 , 1500 поз.4, 2000 поз.6 или 2800 поз.8 Рис.2 происходит изменение установки частоты вращения ротора.

Частота вращения ротора принимает соответствующие надписям значения – 1000, 1500, 2000, 2800 об/мин и индицируется соответствующим светодиодом.

6.5.5 Установка времени центрифугирования:

С помощью кнопок «V» поз.10 и «Λ» поз.11 Рис.2 интервала времени работы (левая кнопка «V» – уменьшает заданную величину, правая кнопка «Λ» - увеличивает значение; удержание кнопки, нажатой более 1,5 секунд, ведет к ускоренному набору значений на индикаторе) по индикатору ВРЕМЯ поз. 9 Рис.2 проверить возможность установки интервала времени центрифугирования от 1 до 99 минут с дискретностью 1 минута.

Если установить по цифровому индикатору интервала времени значение 00 минут, то таймер начнет прямой отсчет времени, а на цифровом индикаторе ВРЕМЯ поз. 9 Рис.2 будет отображаться текущий интервал времени в минутах. При этом в правом нижнем углу цифрового индикатора будет постоянно гореть точка. После отработки 99 минут Центрифуга перейдет в режим останова.

Установить по цифровому индикатору ВРЕМЯ поз. 9 Рис.2 интервал времени, через который должно произойти автоматическое отключение Центрифуги, либо значение 00 минут для прямого отсчета времени.

6.5.6 Повторяемость установленных режимов работы.

Центрифуга обеспечивает повторяемость установленного режима работы (частоты вращения ротора, интервала времени центрифугирования, включения или отключения режима плавного торможения ротора) после полной остановки вращения ротора и открывании крышки, и после отключения сетевого питания при следующем пуске Центрифуги.

6.5.7 Значение предупреждающих звуковых сигналов:

Центрифуга обеспечивает выдачу однократного короткого предупреждающего звукового сигнала длительностью около 0,3 секунды при следующих действиях оператора:

- попытке увеличить или уменьшить значение числового параметра кнопками «V» и «Λ» поз. 10, поз. 11 Рис.2, если достигнуто граничное значение;
- попытке пуска Центрифуги нажатием кнопки СТАРТ поз.14 Рис.2 при незафиксированном замке крышки;
- при попытке открыть крышку кнопкой ОТКР поз.12 Рис.2 в режиме «СТОП», если программа обнаружила остаточное вращение ротора со скоростью более 500 об/мин.

6.5.8 Блокировки:

Блокируется включение двигателя при открытой крышке и открывание крышки при работающем двигателе.

6.5.9 Плавное и экстренное торможение ротора:

Электронное устройство Центрифуги выполняет плавное торможение ротора по окончании процесса центрифугирования и экстренное торможение при возникновении аварийной ситуации во время рабочего цикла.

Время остановки ротора Центрифуги при плавном торможении не превышает 50 секунд, при аварийном торможении не превышает 20 секунд.

Имеется возможность для отключения плавного торможения ротора и перехода в режим свободного выбега. Для этого необходимо одновременно нажать кнопки «V» поз.10 и «Λ» поз.11 Рис.2 у индикатора ВРЕМЯ поз.9 Рис.2, при этом между первым и вторым разрядом индикатора загорится точка в мигающем режиме.

Обратное включение устройства плавного торможения ротора производится, по аналогии с отключением, одновременным нажатием на кнопки «V» и «Λ» у индикатора ВРЕМЯ.

Устройство экстренного торможения включается при возникновении аварийной ситуации во время рабочего цикла при:

- превышении установленного порога вибрации (дисбаланса) ротора;
- открывании крышки при вращающемся роторе;
- включении питания (после аварийного отключения сети) при остаточной частоте вращения ротора более 500 об/мин,

при этом звучит однократный звуковой сигнал длительностью около 1 секунды, индикатор СТОП поз.15 Рис.2 горит в мигающем режиме, на индикаторе ВРЕМЯ поз.9 Рис.2 выводятся символы «Er»;

После аварийного останова ротора на индикаторе ВРЕМЯ поз.9 Рис.2 попеременно выводятся символы «Er» и символьное обозначение типа ошибки:

- «db» - превышение установленного порога вибрации (дисбаланса) ротора;
- «пг» - вращение ротора после включения питания (после аварийного отключения сети);
- «Ld»- замок открылся самопроизвольно, без команды.

Крышка в Центрифуге после аварийного останова не открывается автоматически и остается заблокированной, светодиодные индикаторы СТАРТ и СТОП поз.15 и поз. 17 Рис.2 синхронно мигают, обозначая аварийный останов и необходимость вмешательства оператора.

Для снятия аварийного режима необходимо нажать кнопку СТОП поз.16 Рис.2, прозвучит троекратный сигнал общей длительностью не менее 1,5 секунды и индикатор СТОП поз. 17 Рис.2 загорится в постоянном режиме. Центрифуга перейдет в штатный режим СТОП.

6.5.10 Открывание крышки:

Для принудительного открывания крышки нажмите кнопку ОТКР поз. 12 Рис.2, загорится соответствующий индикатор поз.13 Рис.2, при этом замок крышки должен разблокироваться и крышка приоткрыться.

При экстренной необходимости или при отсутствии напряжения в сети крышка Центрифуги открывается принудительно. Способ открывания изложен в п.6.2 настоящего Руководства.

Крышка Центрифуги Liston C 2204 Classic автоматически приоткрывается после выполнения рабочего цикла и плавного торможения или свободного выбега и остановки ротора, либо нажатием на кнопку ОТКР поз. 12 Рис.2 при неработающем двигателе. При открытой крышке горит индикатор ОТКР поз. 13 Рис.2 Крышка Центрифуги открывается и закрывается вручную.

6.5.11 Неуравновешенность масс и защита от чрезмерного дисбаланса ротора:

Обеспечивается штатное центрифугирование жидких систем при неуравновешенности масс в пробирках ротора до 2,0 г.

При превышении установленного в заводских условиях предела порога срабатывания (соответствующего примерно дисбалансной нагрузке в 20 г) вибрации (дисбаланса) ротором, включается устройство экстренного торможения с соответствующей индикацией (см. п.6.5.9).

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 При транспортировании центрифуг для осуществления гарантийного (послегарантийного) ремонта должны выполняться следующие условия:

7.1.1 Центрифуга в обязательном порядке должна быть продезинфицирована согласно Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (Департамент Госсанэпиднадзора Минздрава России, 30 декабря 1998 г. МУ 287-113) путем протирания рабочей камеры и наружных поверхностей Центрифуги отжатой салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе 3% перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. При этом не допускается использование различных растворителей и бензина.

7.1.2 В штатные резьбовые отверстия снизу центрифуги в обязательном порядке должны быть вкручены шесть транспортировочных винтов, расположенных на днище Центрифуги (четыре транспортировочных винта для Центрифуги C 2204 Classic). Вкручивание производится при аккуратном наклоне Центрифуги с закрытой крышкой набок. В центрифугу вложен паспорт, рекламационный акт и комплект принадлежностей.

7.1.3 Составные части Центрифуги должны быть предохранены от перемещения прокладками и амортизаторами из гофрированного картона или пенопласта. Сменные, запасные детали и принадлежности фасуются в полиэтиленовые пакеты.

7.1.4 Центрифуга упакована в полиэтиленовый мешок, а затем уложена в деревянный ящик или ящик из пятислойного гофрированного картона с применением штатных ложементов из пенопласта или картона, либо других прокладочных материалов (гофрированного картона, листового пенопласта, стружки и др.), позволяющих исключить перемещение Центрифуги внутри тары и защищающей ее корпус от внешних ударов;

7.1.5 На ящике должны быть нанесены манипуляционные знаки, которые соответствуют значениям "Беречь от влаги", "Хрупкое, осторожно", "Верх, не кантовать":



7.2 Транспортирование Центрифуги должны осуществлять перевозчики, специализирующиеся на перевозке соответствующих грузов и имеющие надлежащие лицензии (разрешения) и опыт перевозок.

7.3 Отправка Центрифуги производится в транспортной таре любым крытым транспортным средством с обеспечением защиты от воздействия атмосферных осадков и тумана, в том числе предусматриваются:

- прямые перевозки автомобильным транспортом на расстояние до 1 000 км по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничений скорости или со скоростью до 40 км/ч на расстояние до 250 км по булыжным или грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории);
- смешанные перевозки железнодорожным, воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речными видами транспорта, в сочетании их между собой, и автомобильным транспортом, а также перевозки морским транспортом.

7.4 Условия перевозки Центрифуги в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216-78.

7.5 Погрузка и разгрузка Центрифуги должна производиться по ГОСТ 12.3.009-76.

7.6 Размещение и крепление тары в транспортных средствах должно обеспечивать её устойчивое положение, исключать возможность смещения и ударов друг о друга, о стенки транспортной тары и транспортных средств.

7.7 Запрещается штабелирование ящиков при транспортировании или расположение на них посторонних грузов.

8 ХРАНЕНИЕ

8.1 Условия хранения Центрифуги должны соответствовать условиям хранения 2 ГОСТ 15150. Центрифуга в упакованном виде должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50 до плюс 40 °С с относительной влажностью воздуха до 98% при +25 °С.

8.2 Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

9.1 В процессе эксплуатации необходимо систематическое техническое обслуживание Центрифуги и ее составных частей работниками, которые эксплуатируют и обслуживают Центрифугу.

9.2 Обслуживание и ремонт Центрифуги осуществляется только после её обесточивания.

9.3 Межремонтное обслуживание

Межремонтное обслуживание выполняется персоналом, допущенным к эксплуатации оборудования лаборатории.

Межремонтное обслуживание направлено на поддержание Центрифуги в постоянной технической готовности и обеспечении бесперебойной ее эксплуатации и заключается в:

- ежедневном протирании рабочей камеры и наружных поверхностей Центрифуги отжатой салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе 3% перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 в соответствии с ОСТ 42-21-2-85 и «Методическими указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (Департамент Госсанэпиднадзора Минздрава России, 30 декабря 1998 г. МУ 287-113), не допускается использование различных растворителей и бензина;

- ежедневном поддержании необходимой чистоты используемых пробирок, адаптеров и бакетов в соответствии с МУ 287-113;

- периодическом (не реже одного раза в неделю) внешнем осмотре корпуса, кабеля питания, органов управления, роторов, бакетов, адаптеров и других частей Центрифуги на предмет исправности, повреждений защитных покрытий, целостности корпуса, изоляции электропроводки, устройства заземления и замене деталей, пришедших в негодность.

9.4 Малый (текущий) ремонт

Малый (текущий) ремонт и осмотр выполняется специально обученным персоналом, прошедшим инструктаж по ГОСТ 12.0.004-2015, проверенным на знание конструкции Центрифуги и имеющим квалификацию по электробезопасности не ниже III.

Малый (текущий) ремонт и осмотр направлен на выявление дефектов и восстановление нормальной работоспособности Центрифуги и её составных частей:

- в случае каких-либо неисправностей или поломок, вызванных использованием прибора, необходимости корректирующего обслуживания;
- при контроле технического состояния и профилактики в составе лабораторного оборудования в сроки, установленные в лечебно-профилактическом учреждении;
- с периодичностью от 3 до 6 месяцев в зависимости от интенсивности и условий использования.

9.5 После ремонта или установки Центрифуга подвергается частичному техническому освидетельствованию с целью установления, что заменённое, вновь установленное или отремонтированное оборудование находится в исправном состоянии, обеспечивающем безопасную работу.

Проверяются основные параметры и технические характеристики Центрифуги согласно пп.4.5- 4.11 настоящего Руководства.

Функционирование Центрифуги подвергается визуальному и измерительному контролю согласно указаниям по эксплуатации Центрифуги п.6 настоящего Руководства:

- выполняется контрольная проверка работы во всех режимах;

- испытываются устройства безопасности;
- испытывается защитное зануление (заземление).

9.6 Центрифуга, отработавшая срок службы, подвергается обследованию с целью определения возможности продления срока её безопасной эксплуатации. Определяется ее состояние с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии.

Центрифуга подвергается частичному техническому освидетельствованию согласно п.7.5 настоящего Руководства.

На основании результатов обследования и анализа условий эксплуатации, технического освидетельствования проводятся работы по определению остаточного ресурса прибора.

9.7 Детали, подверженные износу или дефектные и подлежащие замене, запрашиваются у изготовителя в соответствии с указанием модели Центрифуги и её заводского номера.

10 УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 После окончания срока службы, при наступлении предельных состояний и решении о непригодности Центрифуги к ремонту и дальнейшей эксплуатации или нецелесообразности дальнейшей эксплуатации, составные части Центрифуги должны быть демонтированы и утилизированы в установленном порядке в специализированных организациях.

10.2 Перед утилизацией отдельные устройства должны быть разбракованы на предмет оценки возможности дальнейшего использования вне Центрифуги.

10.3 В конце срока службы в медицинских учреждениях, Центрифуга и ее составные части, кроме пробирок, утилизируются в соответствии с разделом X СанПиН 2.1.3684-21 (для отходов класса А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам), СП 2.1.7.1386-03 и Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

Корпус и другие металлические части Центрифуги подлежат переработке как вторичные ресурсы чёрных и цветных металлов.

10.4 Пробирки с образцами относятся к классу Б (эпидемиологически опасные отходы в соответствии с разделом X СанПиН 2.1.3684-21) и утилизируются с применением аппаратных способов обеззараживания, с применением физических методов и изменения внешнего вида, исключающего возможность их повторного применения.

10.5 Персонал, осуществляющий утилизацию, должен соблюдать правила безопасности проведения того или иного способа утилизации.

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества Центрифуги требованиям ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ IEC 61010-1-2014; ГОСТ IEC 61010-2-020-2013; ГОСТ Р МЭК 62304-2013; ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, технических условий ТУ 9443-001-89699725 – 2021 и комплекта конструкторской документации ЦМ.015.000.000 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

11.2 Гарантийный срок службы Центрифуги - 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию,

но не более 30 месяцев с даты отгрузки с предприятия- изготовителя.

11.3 Гарантийный срок хранения Центрифуги – 12 месяцев с даты отгрузки с предприятия-изготовителя.

11.4 Претензии по качеству и комплектности в период гарантийного срока предъявлять предприятию - изготовителю. После ремонта и/или гарантийного обслуживания Центрифуга будет возвращена владельцу в исходном состоянии на момент обратной поставки.

11.5 В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель ремонтирует или заменяет Центрифугу при наличии настоящего паспорта, рекламационного акта, правильно заполненного гарантийного талона и неукоснительного выполнения требований пунктов 1, 2, 6, 7, 8 Руководства по эксплуатации Центрифуги.

11.6 Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие изделия и запасные части устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации Центрифуги и истекает одновременно с истечением срока её гарантии.

11.7 В процессе эксплуатации послегарантийный ремонт Центрифуги осуществляет предприятие - изготовитель на договорной основе.

11.8 Гарантия не распространяется и не устанавливается:

11.8.1 При попытках самостоятельного ремонта без разрешения изготовителя;

11.8.2 На недостатки изделий, которые вызваны несоблюдением прилагаемого Руководства по эксплуатации, транспортными повреждениями, неправильной установкой (в том числе подключением к неправильному напряжению питания), неправильным использованием (включая перегрузку по весу), попаданием внутрь изделия посторонних предметов и другими подобными причинами;

11.8.3 На изделия, которые подвергались конструктивным изменениям неуполномоченными лицами и, если удален, неразборчив или изменен серийный номер изделия;

11.8.4 На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устраненными недостатками, либо возникшими вследствие технического обслуживания или ремонта не уполномоченными организациями, либо ремонт с использованием неоригинальных запасных частей;

11.8.5 На недостатки, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как недопустимые государственными стандартами перепады напряжения питания, при ущербе, причиненном вследствие форс-мажорных обстоятельств (явления природы и стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия и т.п.);

11.8.6 На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации;

11.8.7 На такие повреждения деталей, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования или которые произошли в результате естественного износа (включая расходные материалы), такие как лампочки, элементы питания, фильтры;

11.8.8 На повреждения вследствие химической или электрохимической реакции, ржавчины, коррозии или воздействия воды, на повреждения вследствие пребывания в необычной (ненадлежащей) окружающей среде;

11.8.9 На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием, оговоренный в Руководстве по эксплуатации.

11.9 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без извещения вносить в

конструкцию Центрифуги незначительные изменения (доработки), не влияющие на работоспособность прибора в целом.

12 ХАРАКТЕРНЫЕ НЕПОЛАДКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

12.1 Перед обращением в сервисный центр рекомендуется изучить настоящий раздел на предмет установления возможной причины возникновения проблемы. Несколько простейших проверок и наладок могут устранить её и привести к нормальному функционированию.

12.2 Если приведенные ниже способы решения возникших неисправностей не помогают, необходимо обратиться в сервисную службу!

Неквалифицированные действия могут привести к травме, повреждению Центрифуги и аннулированию гарантийных обязательств!

12.3 Выполнение любой операции, явно запрещенной в настоящем Руководстве, а также любые настройки, действия по сборке, не рекомендованные или запрещенные в настоящем Руководстве, аннулируют гарантийные обязательства!

Таблица 6

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. Не включается двигатель при нажатии на кнопку СТАРТ и горит индикатор ОТКР	Не закрыта плотно крышка.	Закрыть плотно крышку
2. Центрифуга не работает (ротор не вращается).	1. Отсутствует электроэнергия в цепи источника питания. 2. Перегорела вставка плавкая.	1. Проверить наличие электроэнергии в цепи источника питания. 2. Заменить вставку плавкую.
3. При наборе скорости происходит срабатывание датчика дисбаланса, остановка ротора.	1. Не уравновешены массы в пробирках. 2. Центрифуга установлена не по уровню, неустойчиво, на не выравненном горизонтальном основании.	1. Уравновесить массы в пробирках. 2. Установить Центрифугу на устойчивом горизонтальном основании по уровню.
4. При длительной работе происходит останов с ошибкой «Hot»	Перегрев двигателя	Дать остыть двигателю не менее 1 часа.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Обязательное)

БУКВЕННО-ЦИФРОВАЯ КОДИРОВКА НАИМЕНОВАНИЙ РОТОРОВ, БАКЕТОВ И АДАПТЕРОВ

Для наименования роторов, бакетов и адаптеров принята единая (включая экспорт) буквенно-цифровая кодировка, в которой технические параметры кодируются наборами букв и цифр:

Для роторов:

Наименование ротора состоит из:

1234-5-6-7, где:

1 – обозначение типа ротора, S – бакет-ротор, A – угловой ротор;

2 – е-бюджетное исполнение ротора, i – версия ротора из нержавеющей стали;

3 – версия ротора для работы с повышенной частотой вращения S;

4 – рабочий угол ротора, градусов (указывается для роторов с углом работы, отличным от 90 градусов);

5 – количество мест в роторе, штук;

6 – максимальный объем пробирки, мл;

7 – PL – ротор для планшетов типа DWP и MTP, GCARD – ротор для гель-карт.

Например:

S-12-15 – бакет-ротор (S) на 12 бакетов по 15 мл;

S-4-105 – бакет-ротор (S) на 4 бакета по 105 мл;

SiS-6-50 – бакет-ротор(S) из нержавеющей стали (i) с повышенной частотой вращения (S) на 6 бакетов по 50 мл;

A35-30-15 – угловой ротор (A), с рабочим углом 35 градусов на 30 мест по 15 мл;

S-2-PL – бакет-ротор (S) на 2 бакета для планшетов (PL);

SS-2-PL – бакет-ротор (S) с повышенной частотой вращения (S) на 2 бакета для планшетов (PL);

S-12-GCARD – бакет-ротор (S) на 12 бакетов для гель-карт (GCARD);

Si-2-CC – бакет-ротор (S) из нержавеющей стали (i) на 2 бакета для шприц-пробирок.

Для бакетов:

Наименование бакета состоит из:

1234– 56 – 7, где:

1 – обозначение бакета – B;

2 – материал изготовления бакета, i – версия бакета из нержавеющей стали;

3 – высота бакета - L-удлиненный, M-укороченный;

4 – версия бакета – A- аэрозоленепроницаемая, S- для работы с повышенной частотой вращения;

5 – количество мест в бакете, штук; в случае если количество мест зависит от адаптера, указывается не число, а буквенный символ, U-универсальный;

6 – форма универсального бакета- R- круглый, S- прямоугольный или овальный, E-специальной формы, PL-для планшет, GCARD- для гель-карт;

7 – максимальный внутренний диаметр бакета, мм.

Например:

B-1-17 – бакет (B) на одно место, максимальный внутренний диаметр 17 мм;

Bi-1-17 – бакет (B) из нержавеющей стали (i) на одно место, максимальный диаметр 17 мм;

BiL-1-17 – бакет (B) из нержавеющей стали (i), удлиненный (L), на одно место, максимальный диаметр 17 мм;

B-UR-45 – бакет (B), универсальный (U), круглый (R), максимальный внутренний диаметр 45 мм;

B-UE-45 – бакет (B), универсальный (U), специальной формы (E), максимальный внутренний диаметр 45 мм;

BA-UR-45 – бакет (B), аэрозоленепроницаемый (A), универсальный (U), круглый (R), максимальный внутренний диаметр 45 мм;

B-1PL – бакет (B) на 1 место, для планшет (PL);

BS-1PL – бакет (B) на 1 место для работы с повышенной частотой вращения (S), для планшет (PL);

B-1GCARD – бакет (B) на 1 место, для гель-карт (GCARD);

B-1CC – бакет (B) на 1 место шприц-пробирок.

Для адаптеров:

Наименование адаптера состоит из:

1234-5-6-78, где:

1 – обозначение адаптера - T;

2 – обозначение конструкции- A – сборный, W – адаптер-вставка;

3 – форма адаптера - R – для круглого бакета, S – для прямоугольного или овального бакета, E – специальной формы;

4 – высота адаптера - L-удлиненный, M-укороченный;

5 – максимальный диаметр пробирки, устанавливаемой в адаптер, или диаметр адаптера, устанавливаемого на дно бакета для уменьшения его высоты, мм;

6 – количество мест в адаптере, штук;

7 – форма устанавливаемой пробирки или планшета, C- для пробирок конической формы, F-для пробирок типа «Фалькон»;

8 – материал изготовления адаптера – Q-изготовленный из амортизирующего материала.

Например:

TWR-16-1-F – адаптер - вставка (TW), для круглого бакета (R), диаметр бакета, куда он может быть установлен- 16 мм, на одно место, для пробирок типа «Фалькон»;

TASL-17-4-FQ – сборный адаптер (TA), для прямоугольного бакета (S), удлиненный (L), максимальный диаметр пробирок 17 мм, на 4 места, для пробирок типа «Фалькон», изготовленный из амортизирующего материала (Q);

TWS-65-1 – адаптер-вставка (TW), для прямоугольного бакета (S), максимальный диаметр 65 мм, 1 место;

TAEM-17-7 – сборный адаптер (TA), специальной формы (E), укороченный (M), максимальный диаметр 17 мм, 7 мест.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Обязательное)

СООТВЕТСТВИЕ БУКВЕННО_ЦИФРОВОЙ КОДИРОВКИ РОТОРОВ, БАКЕТОВ И АДАПТЕРОВ ОБОЗНАЧЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИЙ.

Таблица Б.1

Наименование ротора	Обозначение конструкторского документа	Наименование бакета	Обозначение конструкторского документа	Наименование адаптера	Обозначение конструкторского документа
Se-4-50	ЦМ.015.209.000	B-1-17	ЦМ.014.184.006	TWR-16-1-F	ЦМ.012.000.018-01
S-8-15	ЦМ.015.042.000	B-1-30	ЦМ.015.203.006	TWR-17-1	ЦМ.015.200.006
Se-12-15	ЦМ.015.040.000	B-1GCARD	ЦМ.015.046.003		
S-12-GCARD	ЦМ.015.046.000				
S-20-GCARD	ЦМ.015.046.000-02				
S-24-GCARD	ЦМ.015.046.000-01				

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(Обязательное)

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРИФУГ

Таблица В.1

Наименование Центрифуги	Максимальная вместимость ротора, кол. мест x мл	Макс. вес загрузки ротора, г	Макс. скорость, об/мин	Макс. ОЦУ (x g)	Максимальная кинетическая энергия ротора, Н x м
Liston C 2204 Classic	4x50, 12x15	600	2800	1500	400

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(Обязательное)

МАКСИМАЛЬНАЯ ОБЪЕМНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ И ВЕС ЗАГРУЗКИ РОТОРОВ И БАКЕТОВ

Таблица Г.1

Наименование Центрифуги	Наименование ротора	Наименование бакета	Макс. вместимость ротора, мл	Макс. вес загрузки ротора, г	Кол-во бакетов в роторе, шт	Макс. вместим. бакета, мл	Макс. вес загрузки бакета (включая адаптер), г	Макс. вес загруженного бакета, г
Liston C 2204 Classic	Se-4-50	B-1-30	200	440	4	50	75	110
	S-8-15	B-1-17	120	400	8	15	31	50
	Se-12-15	B-1-17	180	600	12	15	31	50
	S-12-GCARD	B-1GCARD		444	12	1GCARD	13	37
	S-20-GCARD	B-1GCARD		740	20	1GCARD	13	37
	S-24-GCARD	B-1GCARD		888	24	1GCARD	13	37

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(Обязательное)

МАКСИМАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКЕТОВ И АДАПТЕРОВ

Таблица Д.1

Наименование Центрифуги	Наименование ротора	Наименование бакета	Наименование адаптера	Диаметр пробирки, мм	Максимальная\минимальная длина пробирки, мм	Радиус центрифугирования, мм	Макс. скорость, об/мин	Макс. ОЦУ (x g)
Liston C 2204 Classic	Se-4-50	B-1-30	-	29	125\101	171	2800	1500
	S-8-15	B-1-17	-	17	121\95	162	2800	1420
			TWR-17-1	17	100\75	142	2800	1245
			TWR-16-1-F	17	121\95	160	2800	1402
	Se-12-15	B-1-17	-	17	112\95	167	2800	1467
			TWR-17-1	17	92\75	147	2800	1288
			TWR-16-1-F	17	112\95	165	2800	1446
	S-12-GCARD	B-1GCARD	-	-	-	111	2800	973
	S-20-GCARD	B-1GCARD	-	-	-	108	2800	947
	S-24-GCARD	B-1GCARD	-	-	-	108	2800	947

Примечание: Вычисление значений единиц относительного центробежного ускорения на рабочих частотах установленного ротора производится по формуле:

$$ОЦУ=1,118 \times R \times (N/1000)^2$$

где R - радиус центрифугирования, в миллиметрах,

N – установленная частота вращения ротора, в оборотах в минуту, указанные в Таблице Д.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(Обязательное)

1. Перечень основных применяемых материалов:

Таблица Е.1

Наименование	Нормативно-технический документ
Сталь листовая холоднокатаная 08пс	ГОСТ 19904-90
Сталь листовая нержавеющая 12Х18Н10Т	ГОСТ 5582-75
Алюминий листовой АД1	ГОСТ 21631-76
Алюминиевый прокат – круг Д16Т, Д16	ГОСТ 21488-76
Сталь инструментальная нержавеющая 40Х13	ГОСТ 5632-72
Полипропилен листовой	ГОСТ 26996-86.
Полиацеталь ПОС-С	ТУ СТО-002-17152852-2011
Полипропилен, гранулы	ТУ 20.16.51-136-05766801-2015
Термоэластопласты, гранулы	ГОСТ ISO 2781-2013
Пластик листовой АБС/ПММА	ТУ 2246-009-06417304-2019
Полиэфирная порошковая краска	ТУ 2329-001-73039694-2016
Пластик АБС-2020-31, светло-серый	ТУ6-05-1587-84
Поликарбонатная (РС) термопластичная пленка	CAS 24936-68-3

2. Перечень материалов, вступающих в непосредственный или опосредованный контакт с организмом человека при эксплуатации:

Таблица Е.2

Наименование	Нормативно-технический документ	Изготовитель/поставщик
Пластик АБС формованный	ТУ 2246-009-06417304-2019	ООО «Вист-Сервис»
Поверхности, покрытые полиэфирной порошковой краской	ТУ 2329-001-73039694-2016	ООО «Порошковые покрытия Черноземья»
Полипропилен формованный	ТУ 20.16.51-136-05766801-2015	ООО "ТД Полипластик"
Сталь нержавеющая 12Х18Н10Т	ГОСТ 5632-72	ООО «Сервисный металлоцентр «Сталькор», ООО «Салют Сталь»
Термоэластопласт формованный	ГОСТ ISO 2781-2013	ООО «НПП Симплекс»

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(Справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

Перечень средств испытаний и измерений, применяемых для контроля Центрифуг.

Таблица Ж.1

Наименование и условное обозначение	Используемые параметры (характеристики)
Весы для статического взвешивания	Предел измерений 200 кг, цена деления 0,1 кг
Рулетка измерительная ЗПК2-10АНТ10	Предел измерений 5000 мм, цена деления 1 мм
Дальномер лазерный Leica DISTO D5	Пределы измерений – от 0 до 180; предел допускаемой погрешности ± 3
Шумомер ВШВ-003	Диапазон измерений от 22 до 140 дБ
Регулятор напряжения ЛАТР -1М	Предел регулирования от 0 до 300 В
Амперметр ГОСТ 8711	Диапазон измерений от 0 до 5 А; кл. 1,5
Вольтметр переменного тока	Предел измерений 300 В 4 класс 1,5
Трехфазный счетчик Меркурий 230 AR-01 R	Класс точности 1
Секундомер СОП пр-2а-3 ГОСТ 5072	Класс 3
Универсальная пробойная установка	Испытательное напряжение от 0 до 10 кВ
Термовлагокамера	Диапазон температур от минус 50 до +50, допустимые отклонения от установленного значения ± 3 С; диапазон относительной влажности от 10 до 95%, допустимые отклонения от установленного значения $\pm 3\%$
Стенд имитации транспортной тряски	Погрешность воспроизведения ускорения от минус 10% до +25%
Стенд проверки вибропрочности	Диапазон частот от 10 до 55 Гц
Стенд для проверки ударопрочности	Пиковое ударное ускорение 100 мс
Барометр-анероид специальный БАММ-1 ТУ25-04-1513	Диапазон измерений от 80 до 106 кПа
Психрометр аспирационный электрический М-34 ТУ25 -16-7.054	Диапазон измерений от 10% до 100%

Примечание – Допускается применение других средств измерений и испытательного оборудования, имеющих аналогичные метрологические и технические характеристики.


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО, СКРЕПЕНО ПЕЧАТЬЮ

39 листа (ов)

Директор ООО «Листон»

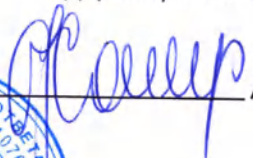 /Сапрыгин С.Н./



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛИСТОН»

LISTON

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Листон»


С.Н.Сапрыгин

10 января 2023 г.



Центрифуги лабораторные медицинские
Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203, Liston C 2204 Classic
по ТУ 9443-001-89699725 – 2021

Паспорт
ЦМ.012.000.000 ПС

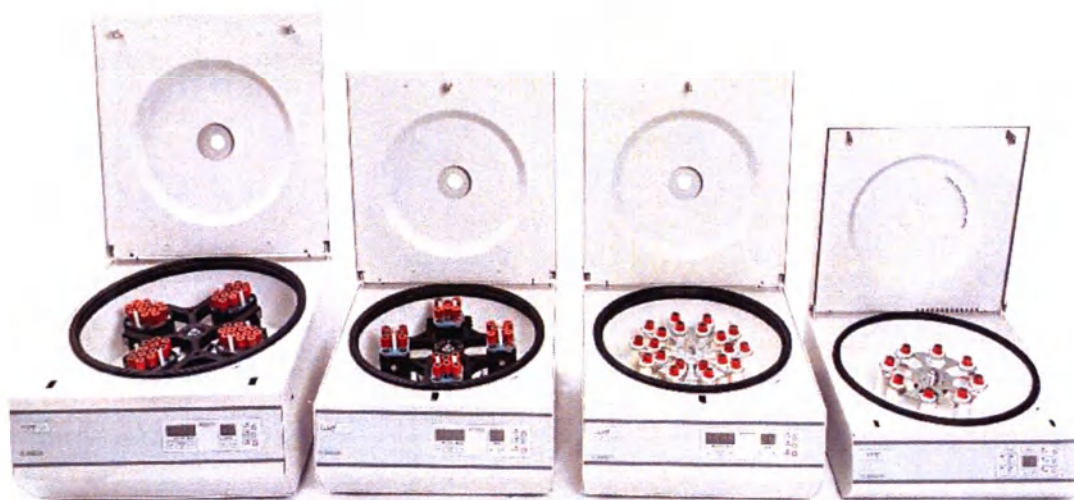

Калужская область
г. Жуков
2023 г.

Ив. №	Ив. №	Ив. №	Ив. №
Взам. инв. №	Взам. инв. №	Взам. инв. №	Взам. инв. №
Подпись и дата	Подпись и дата	Подпись и дата	Подпись и дата
Ив. №подл.	Ив. №подл.	Ив. №подл.	Ив. №подл.

ДАННЫЕ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Тип и обозначение: Центрифуга лабораторная медицинская
 Модель: Liston C 2201 Liston C 2202 Liston C 2203
 Liston C 2204 Classic
 (нужное подчеркнуть)
 Заводской номер: _____
 Дата изготовления: _____
 Комплектность _____
 Ротор: _____
 Бакеты: _____ шт.
 Адаптеры: _____ шт.

Наименование изготовителя: ООО «Листон»
 Адрес: 249191, Российская Федерация, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Сельхозтехника, д. 15
 Телефон / факс: +7 (800) 350-40-41, (484) 397-22-23
 Сайт, e-mail: _____
 общие вопросы: www.liston.ru, info@liston.ru
 технические вопросы: _____
 сервисный центр: _____

Центрифуга соответствует
 ТУ 9443-001-89699725 – 2021
 и признана годной к эксплуата-
 тации

штамп ОТК

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационное удостове- рение:	
Выдано:	
Центрифуга соответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ ИЕС 61010-1-2014, ГОСТ ИЕС 61010-2-020-2013, ГОСТ Р МЭК 62304-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ Р МЭК 61326-1- 2014

					ЦМ.012.000.000 ПС						
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Центрифуги лабораторные медицин- ские Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203, Liston C 2204 Classic по ТУ 9443-001-89699725 – 2021 Паспорт	Литера		Лист		Листов	
Разраб.	Калмеев	СЗ	10.01.23					2		36	
Проверил	Смирнов	СЗ	10.01.23								
Зав.НИЛ											
Н.контр.	Мелихова	СЗ	10.01.23								
ООО «Листон»											
INFO@CIIMI.RU WWW.GOSDRAVNADZOR.RU											

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	4
2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	17
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	21
5 ХРАНЕНИЕ.....	22
6 УТИЛИЗАЦИЯ.....	22
7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	23
8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	25
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	26
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.....	27
11 УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	28
12 ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	29
13 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	30
14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	34
15 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.....	35
16 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	36

Настоящий Паспорт распространяется на Центрифуги лабораторные медицинские настольные Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203, Liston C 2204 Classic (далее по тексту – Центрифуги).

Перед началом работ на Центрифуге внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации ЦМ.012.000.000 РЭ (для Центрифуг Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203), или Руководство по эксплуатации ЦМ.015.000.000 РЭ (для Центрифуг Liston C 2204 Classic,) и точно следуйте его указаниям.

Руководство содержит всю необходимую информацию по транспортированию, установке, использованию в соответствии с назначением, технике безопасности и мерах предосторожности при работе и техническом обслуживании Центрифуги.

Руководство должно рассматриваться как неотъемлемая часть Центрифуги и должно быть всегда доступно и находиться в распоряжении персонала лаборатории.

Центрифуга должна эксплуатироваться и обслуживаться только специально обученным квалифицированным персоналом, имеющим опыт в эксплуатации медицинского лабораторного оборудования.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Центрифуга предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до $1,2 \text{ г/см}^3$ в поле центробежных сил и применяется в практике клинической лабораторной диагностики, в лабораториях поликлиник, больниц.

1.2 Центрифуга обеспечивает возможность центрифугирования жидких систем, с неуравновешенностью масс в пробирках до 2,0 г.

1.3 Центрифуга представляет собой медицинское неинвазивное изделие длительного применения, полной заводской готовности, включающее в себя все необходимые для обеспечения надёжного функционирования устройства контроля и управления.

1.4 Классификация Центрифуги:

- а) по коду ОКПД 2 – 28.29.41.110;
- б) по виду медицинского изделия, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 260430 «Центрифуга общего назначения ИВД»;
- в) по зависимости от потенциального риска применения – класс 2а (согласно Номенклатурной классификации МИ, утвержденной Приказом Минздрава России от 06.06.2012 г. № 4н) и по ГОСТ 31508;
- г) по воспринимаемым механическим воздействиям – группа 2 по ГОСТ Р 50444;
- д) при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.
- е) по электромагнитной совместимости – соответствует ГОСТ Р МЭК 61326-1;
- ж) по уровню промышленных радиопомех – не превышают значений, устанавливаемых ГОСТ Р 51318.11.
- з) по типу размещения – настольная, закрытая;
- и) по режиму работы – автоматическая, повторно-продолжительного действия;

1.5 Пример записи Центрифуги при заказе и в другой документации: «Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2201 ТУ 9443-001-89699725-2021».

2 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Центрифуга соответствует требованиям ГОСТ Р 50444–2020; ГОСТ IEC 61010-1-2014; ГОСТ IEC 61010-2-020-2013; ГОСТ Р МЭК 62304-2013; ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ТУ 9443-001-89699725-2021.

2.2 Центрифуга изготовлена и проверена в соответствии с комплектом конструкторской документации:

Liston C 2201 – по ЦМ.012.000.000;

Liston C 2202 – по ЦМ.014.000.000;

Liston C 2203 – по ЦМ.013.000.000;

Liston C 2204 Classic – по ЦМ.015.000.000;

2.3 Центрифуга оснащена программным обеспечением по ГОСТ Р МЭК 62304-2013, ГОСТ Р 55544-2013 и ГОСТ ISO 14971-2011, выполняющим функции:

- реализации и контроля заданных режимов работы;
- отображения состояния и параметров работы;
- выполнения заданных алгоритмов;
- оперативного управления;
- регистрации аварийных событий;

2.4 Основные технические характеристики Центрифуги приведены в Таблице 1 (более подробно технические характеристики и устройство Центрифуги изложено в Руководстве по эксплуатации ЦМ.012.000.000 РЭ (для Центрифуг Liston C 2201, Liston C 2202, Liston C 2203) и Руководстве по эксплуатации ЦМ.015.000.000 РЭ (для Центрифуги Liston C 2204 Classic,):

Таблица 1

	Центрифуги			
	Liston C 2201	Liston C 2202	Liston C 2203	Liston C 2204 Classic
Наименование параметра	Значения			
Внешний вид, качество сборки	В соответствии с рабочими чертежами, наличие дефектов не допускается			
Номинальное напряжение питающей однофазной сети, В	230			
- с допустимым отклонением, В	±23			
Частота переменного тока питающей сети, Гц	50			
- с допустимым отклонением, Гц	± 0,5			
Токи в установившемся режиме, потребляемые центрифугой, А, не более	1,6	2,3	2,9	1,35
Полная (кажущаяся) мощность в установившемся режиме, В·А, не более	405	590	730	330
Диапазон установки и отображение				

текущей частоты вращения ротора, об/мин	от 100 до 3 600	от 100 до 4000	от 100 до 3 500	1000, 1500, 2000, 2800
с дискретностью, об/мин	50	50	50	-
Предел допускаемого отклонения частоты вращения ротора от заданного значения, об/мин., не более	± 50	± 50	± 50	± 100
Диапазон установки и отображения текущего относительного центробежного ускорения ротора в единицах ОЦУ	от 10g до 2500g	от 10g до 3000 g	от 10g до 2500 g	
с дискретностью, ед.				
при значениях ОЦУ от 10 до 100;	10	10	10	
при значениях ОЦУ от 100 до 500;	25	25	25	
при значениях ОЦУ от 500 до 2000;				
при значениях ОЦУ свыше 2000	50 100	50 100	50 100	-
Предел допускаемого отклонения центробежного ускорения, ед., не более				
- при значениях ОЦУ от 10 до 100;	± 10			
- при значениях ОЦУ от 100 до 500;	± 25			
- при значениях ОЦУ от 500 до 2000;	± 50			
- при значениях ОЦУ свыше 2000	± 100			
Время непрерывной работы, мин	180			
- с последующим перерывом, мин, не менее	60			
Режим эксплуатации общий. Периоды действия и ожидания чередуются случайным образом.				
Время выхода на рабочий режим после включения (достижения установившегося режима), мин., не более	2			
Обеспечиваемая установка и отображение интервала времени центрифугирования, мин.	1- 99			
- с дискретностью, мин*	1			
Пределы допускаемого отклонения от заданного значения интервала				

времени, %, не более	± 1			
Длительность сигнала, с	$\sim 1,0$			
- предупреждающего;	$\sim 1,5$			
- аварийного;	$\sim 0,3$			
- для снятия аварийного режима				
Корректированный уровень звуковой мощности при измерительном расстоянии 1 метр, дБ·А, не более	60			
Корректированный уровень звуковой мощности однократного короткого (предупреждение), однократного длинного (авария, ошибка) и троекратного (окончание процесса) звукового сигнала при измерительном расстоянии 1 метр, дБ · А, не менее,	70			
Средний срок службы Центрифуги, лет, не менее	5			
Время остановки ротора при плавном торможении секунд, не более	40			50
Время аварийного торможения ротора, секунд, не более	25	25	30	20
Допустимая температура окружающей среды, °С	от +10 до +35			
Масса конструкционная, кг**	20,0 $\pm$ 1,0	21,5 $\pm$ 1,0	48,5 $\pm$ 1,5	18,4 $\pm$ 1 кг
Габаритные размеры (ширина × глубина × высота), мм	(418 $\pm$ 5)×(485 $\pm$ 5)×(257 $\pm$ 5)	(418 $\pm$ 5)×(485 $\pm$ 5)×(257 $\pm$ 5)	(482 $\pm$ 5)×(565 $\pm$ 5)×(288 $\pm$ 5)	(411 $\pm$ 5)×(480 $\pm$ 5)×(221 $\pm$ 5)

Примечания:

1 * Последняя минута текущего интервала времени, оставшаяся до торможения ротора, должна отображаться в секундах

2 ** Без роторов и принадлежностей

3 Изготовитель оставляет за собой право изменения и уточнения, приведенных в таблице 1 характеристик в соответствии с требованиями конструкторской документации на конкретную модификацию Центрифуги.

2.5 Соответствие буквенно-цифровой кодировки роторов, бакетов и адаптеров обозначению основных конструкторских документов (спецификаций), по которым они изготовлены, приведены в Таблице 2:

Таблица 2

Наименование ро- тора	Обозначение кон- структорского до- кумента	Наимено- вание ба- кета	Обозначение кон- структорского до- кумента	Наименование адаптера	Обозначение кон- структорского доку- мента
S-4-50	ЦМ.015.044.000	B-1-16	ЦМ.015.218.006	TWR-15-1	ЦМ.015.201.006
Se-4-50	ЦМ.015.209.000	B-1-17	ЦМ.014.184.006	TWR-17-1	ЦМ.015.200.006
SiS-4-50	ЦМ.014.045.000	Bi-1-17	ЦМ.014.042.006	TWR-17-1-F	ЦМ.012.041.004
S-6-50	ЦМ.012.290.000	BiL-1-17	ЦМ.012.041.006	TWR-16-1-F	ЦМ.012.000.018-01
Si-6-50	ЦМ.012.290.000-01	B-1-30	ЦМ.015.203.006	TWR-30-1-F	ЦМ.014.043.003
SiS-6-50	ЦМ.014.043.000	Bi-1-31	ЦМ.014.043.006	TASM-11-10	ЦМ.012.211-02
S-8-15	ЦМ.015.042.000	B-US-45	ЭМ.Ц.5702.00.00.20	TACM-12-8	ЦМ.012.212.000
SS-10-15	ЦМ.014.186.000-02	B-UE-45	ЦМ.014.000.038	TACM-13-8	ЦМ.012.211.000
S-10-15	ЭМ.Ц001.104.000	B-US-65	ЦМ.013.080.001	TASL-13-8	ЦМ.012.211.000-01
Si-10-15	ЦМ.012.042.000	B-1PL	ЦМ.012.044.002	TASM-16-6	ЦМ.012.222.000
SiS-10-15	ЦМ.014.042.000	BS-1PL	ЦМ.015.045.100	TASL-16-6	ЦМ.012.221.000
S-12-10	ЦМ.015.043.000	B-1GCARD	ЦМ.015.046.003	TASM-17-6	ЦМ.012.231.000
S-12-15	ЦМ.014.187.000-01	B-1CC	ЦМ.013.000.040	TASL-17-6	ЦМ.012.231.000-01
Se-12-15	ЦМ.015.040.000			TASL-17-4-F	ЦМ.012.251.000
Si-12-15	ЦМ.012.041.000-01			TASL-17-4-FQ	ЦМ.012.259.000
S-20-15	ЦМ.014.186.000-01			TASM-21-4	ЦМ.012.253.000
Si-20-15	ЦМ.012.043.000			TASL-21-4	ЦМ.012.253.000-01
S-24-15	ЦМ.014.187.000			TASM-22-2	ЦМ.012.264.000
Si-24-15	ЦМ.012.041.000			TASM-26-2	ЦМ.012.254.000
A45-10-15	ЦМ.015.208.000			TASL-26-2	ЦМ.012.254.000-01
A35-30-15	ЦМ.014.044.000			TASM-26-2-FQ	ЦМ.012.263.000
S-4-100	ЦМ.014.041.000			TASL-26-2-FQ	ЦМ.012.262.000
S-4-250	ЦМ.013.041.000			TASM-29-1	ЦМ.012.255.000
S-2-PL	ЦМ.012.044.000			TASL-29-1	ЦМ.012.255.000-01
SS-2-PL	ЦМ.014.046.000			TASL-29-1-FQ	ЦМ.012.260.000
S-12-GCARD	ЦМ.015.046.000			TASM-30-1	ЦМ.012.265.000
S-20-GCARD	ЦМ.015.046.000-02			TASM-31-1	ЦМ.012.256.000
S-24-GCARD	ЦМ.015.046.000-01			TASL-31-1	ЦМ.012.256.000-01
Si-2-CC	ЦМ.013.044.000			TASM-34-1	ЦМ.012.257.000
				TASL-34-1	ЦМ.012.257.000-01
				TASM-38-1	ЦМ.012.258.000
				TASL-38-1	ЦМ.012.258.000-01
				TWS-45-1	ЦМ.012.261.000
				TAEM-13-8	ЦМ.012.234.000
				TAEL-13-8	ЦМ.012.237.000
				TAEM-16-7	ЦМ.012.235.000
				TAEL-16-7	ЦМ.012.233.000
				TAEM-17-7	ЦМ.012.236.000
				TAEL-17-7	ЦМ.012.232.000
				TASM-13-14	ЦМ.013.082.000
				TASL-13-14	ЦМ.013.082.000-01
				TASM-16-12	ЦМ.013.083.000-01
				TASL-16-12	ЦМ.013.083.000
				TASM-17-12	ЦМ.013.081.000-01
				TASL-17-12	ЦМ.013.081.000
				TASL-17-8-F	ЦМ.013.099.000
				TASL-17-8-FQ	ЦМ.013.122.000
				TASM-21-7	ЦМ.013.101.000
				TASL-21-7	ЦМ.013.101.000-01
				TASM-26-5	ЦМ.013.102.000
				TASL-26-5	ЦМ.013.102.000-01
				TASL-26-5-FQ	ЦМ.013.121.000-01
				TASM-29-2	ЦМ.013.103.000

			TASL-29-2	ЦМ.013.103.000-01
			TASL-29-2-FQ	ЦМ.013.123.000
			TASM-31-2	ЦМ.013.104.000
			TASL-31-2	ЦМ.013.104.000-01
			TASM-34-2	ЦМ.013.105.000
			TASL-34-2	ЦМ.013.105.000-01
			TASM-38-2	ЦМ.013.106.000
			TASL-38-2	ЦМ.013.106.000-01
			TASM-44-1	ЦМ.013.100.000-01
			TASL-44-1	ЦМ.013.100.000
			TASL-45-1	ЦМ.013.086.000
			TASM-47-1	ЦМ.013.087.000
			TASM-48-1	ЦМ.013.085.000
			TASL-48-1	ЦМ.013.092.000
			TASM-50-1	ЦМ.013.107.000
			TASL-50-1	ЦМ.013.107.000-01
			TASM-54-1	ЦМ.013.084.000
			TASL-54-1	ЦМ.013.097.000
			TASM-55-1	ЦМ.013.108.000
			TASL-55-1	ЦМ.013.108.000-01
			TASL-56-1	ЦМ.013.124.000
			TASM-60-1	ЦМ.013.109.000
			TASL-60-1	ЦМ.013.109.000-01
			TWS-65-1	ЦМ.013.120.000
			TAR-17-1	ЦМ.013.046.000
			TAR-21-1	ЦМ.013.045.000
			TAR-28-1	ЦМ.013.044.006
			TAR-32-1	ЦМ.013.044.007

2.6 Буквенно-цифровая кодировка наименований роторов, бакетов и адаптеров, принятая в Таблице 2:

Для роторов:

Наименование ротора состоит из:

1234-5-6-7, где:

- 1 – обозначение типа ротора, S – бакет-ротор, A – угловой ротор;
- 2 – е-бюджетное исполнение ротора, i – версия ротора из нержавеющей стали;
- 3 – версия ротора для работы с повышенной частотой вращения S;
- 4 – рабочий угол ротора, градусов (указывается для роторов с углом работы, отличным от 90 градусов);
- 5 – количество мест в роторе, штук;
- 6 – максимальный объем пробирки, мл;
- 7 – PL – ротор для планшетов типа DWP и MTP, GCARD – ротор для гель-карт.

Для бакетов:

Наименование бакета состоит из:

1234– 56 – 7, где:

- 1 – обозначение бакета – B;
- 2 – материал изготовления бакета, i – версия бакета из нержавеющей стали;
- 3 – высота бакета – L-удлиненный, M-укороченный;
- 4 – версия бакета – A- аэрозоленепроницаемая, S- для работы с повышенной частотой вращения;

5 – количество мест в бакете, штук; в случае если количество мест зависит от адаптера, указывается не число, а буквенный символ, U-универсальный;

6 – форма универсального бакета- R- круглый, S- прямоугольный или овальный, E-специальной формы, PL-для планшет, GCARD- для гель-карт;

7 – максимальный внутренний диаметр бакета, мм.

Для адаптеров:

Наименование адаптера состоит из:

1234-5-6-78, где:

1 – обозначение адаптера - T;

2 – обозначение конструкции- A - сборный, W – адаптер-вставка;

3 – форма адаптера - R - для круглого бакета, S - для прямоугольного или овального бакета, E – специальной формы;

4 – высота адаптера - L-удлиненный, M-укороченный;

5 – максимальный диаметр пробирки, устанавливаемой в адаптер, или диаметр адаптера, устанавливаемого на дно бакета для уменьшения его высоты, мм;

6 – количество мест в адаптере, штук;

7 – форма устанавливаемой пробирки или планшета, C- для пробирок конической формы, F-для пробирок типа «Фалькон»;

8 – материал изготовления адаптера – Q-изготовленный из амортизирующего материала.

2.7 Спецификация применяемости роторов, бакетов и адаптеров в Центрифуге приведена в Таблице 3:

Таблица 3

Наименование Центрифуги	Наименование ротора	Наименование бакета	Количество бакетов в роторе	Наименование адаптера	Количество адаптеров в роторе	Количество пробирок в роторе
Liston C 2201	S-6-50	B-1-30	6	-	-	6
	Si-6-50	Bi-1-31	6	-	-	6
				TWR-30-1-F	6	6
	SS-10-15	B-1-17	10	-	-	10
				TWR-17-1	10	10
				TWR-16-1-F	10	10
	Si-10-15	BiL-1-17	10	-	-	10
				TWR-17-1	10	10
				TWR-17-1-F	10	10
	S-12-15	B-1-17	12	-	-	12
				TWR-17-1	12	12
				TWR-16-1-F	12	12
	Si-12-15	BiL-1-17	12	-	-	12
				TWR-17-1	12	12
				TWR-17-1-F	12	12
	S-20-15	B-1-17	20	-	-	20
				TWR-17-1	20	20
				TWR-16-1-F	20	20
	Si-20-15	BiL-1-17	20	-	-	20
				TWR-17-1	20	20
				TWR-17-1-F	20	20

Liston C 2202	S-24-15	B-1-17	24	-	-	24
				TWR-17-1	24	24
				TWR-16-1-F	24	24
	Si-24-15	BiL-1-17	24	-	-	24
				TWR-17-1	24	24
				TWR-17-1-F	24	24
	A45-10-15	B-1-17	10	-	-	10
				TWR-17-1	10	10
				TWR-16-1-F	10	10
	S-2-PL	B-1PL	2	-	-	-
	SiS-4-50	Bi-1-31	4	-	-	4
				TWR-30-1-F	4	4
	SiS-6-50	Bi-1-31	6	-	-	6
				TWR-30-1-F	6	6
	SiS-10-15	Bi-1-17	10	-	-	10
				TWR-17-1	10	10
				TWR-17-1-F	10	10
	S-4-100	B-US-45	4	TASM-11-10	4	40
				TASM-12-8	4	32
				TASM-13-8	4	32
				TASL-13-8	4	32
				TASM-16-6	4	24
				TASL-16-6	4	24
				TASM-17-6	4	24
				TASL-17-6	4	24
				TASL-17-4-F	4	16
				TASL-17-4-FQ	4	16
				TASM-21-4	4	16
				TASL-21-4	4	16
				TASM-22-2	4	8
				TASM-26-2	4	8
				TASL-26-2	4	8
				TASM-26-2-FQ	4	8
				TASL-26-2-FQ	4	8
				TASM-29-1	4	4
				TASL-29-1	4	4
				TASL-29-1-FQ	4	4
				TASM-30-1	4	4
				TASM-31-1	4	4
				TASL-31-1	4	4
				TASM-34-1	4	4
				TASL-34-1	4	4
				TASM-38-1	4	4
				TASL-38-1	4	4
				TWS-45-1	4	4
		B-UE-45	4	TAEM-13-8	4	32
				TAEL-13-8	4	32
				TAEM-16-7	4	28
				TAEL-16-7	4	28
				TAEM-17-7	4	28
				TAEL-17-7	4	28
	A35-30-15	BiL-1-17	30	-	-	30
				TWR-17-1	30	30
				TWR-17-1-F	30	30
	SS-2-PL	BS-1PL	2	-	-	-
	S-4-250		4	TASM-13-14	4	56

Liston C 2203		B-US-65		TASL-13-14	4	56
				TASM-16-12	4	48
				TASL-16-12	4	48
				TASM-17-12	4	48
				TASL-17-12	4	48
				TASL-17-8-F	4	32
				TASL-17-8-FQ	4	32
				TASM-21-7	4	28
				TASL-21-7	4	28
				TASM-26-5	4	20
				TASL-26-5	4	20
				TASM-26-5-FQ	4	20
				TASM-29-2	4	8
				TASL-29-2	4	8
				TASL-29-2-FQ	4	8
				TASM-31-2	4	8
				TASL-31-2	4	8
				TASM-34-2	4	8
				TASL-34-2	4	8
				TASM-38-2	4	8
				TASL-38-2	4	8
				TASM-44-1	4	4
				TASL-44-1	4	4
				TASL-45-1	4	4
				TASL-47-1	4	4
				TASM-48-1	4	4
				TASL-48-1	4	4
				TASM-50-1	4	4
				TASL-50-1	4	4
				TASM-54-1	4	4
				TASL-54-1	4	4
				TASL-55-1	4	4
				TASL-56-1	4	4
				TASM-60-1	4	4
				TASL-60-1	4	4
				TWS-65-1	4	4
Liston C 2204 Classic	Si-2-CC	B-1CC	2	TAR-17-1	1	1
				TAR-21-1	1	1
				TAR-28-1	1	1
				TAR-32-1	1	1
	Se-4-50	B-1-30	4	-	-	4
	S-8-15	B-1-17	8	-	-	8
				TWR-17-1	8	8
				TWR-16-1-F	8	8
	Se-12-15	B-1-17	12	-	-	12
				TWR-17-1	12	12
				TWR-16-1-F	12	12
	S-12-GCARD	B-1GCARD	12	-	-	-
	S-20-GCARD	B-1GCARD	20	-	-	-
	S-24-GCARD	B-1GCARD	24	-	-	-

2.8 Максимальные эксплуатационные характеристики Центрифуг приведены в Таблице 4:

Таблица 4

Наименование Центрифуги	Максимальная вместимость ротора, кол. мест x мл	Макс. вес загрузки ротора, г	Макс. скорость, об/мин	Макс. ОЦУ (x g)	Максимальная кинетическая энергия ротора, Н x м
Liston C 2201	6x50, 20x15, (12x10+12x15)	1208	3600	2500	1400
Liston C 2202	4x100, 28x10, 30x15	1650	4000	3005	3290
Liston C 2203	4x250, 48x15	4200	3500	2493	6260
Liston C 2204 Classic	4x50, 12x15	600	2800	1500	400

2.9 Максимальные объемная вместимость и вес загрузки роторов и бакетов приведены в Таблице 5:

Таблица 5

Наименование Центрифуги	Наименование ротора	Наименование бакета	Макс. вместимость ротора, мл	Макс. вес загрузки ротора, г	Кол-во бакетов в роторе, шт	Макс. вместим. бакета, мл	Макс. вес загрузки бакета (включая адаптер), г	Макс. вес загруженного бакета, г
Liston C 2201	S-6-50	B-1-30	300	660	6	50	75	110
	Si-6-50	Bi-1-31	300	740	6	50	82	123
	SS-10-15	B-1-17	150	500	10	15	31	50
	Si-10-15	BiL-1-17	150	550	10	15	31	55
	S-12-15	B-1-17	180	600	12	15	31	50
	Si-12-15	BiL-1-17	180	660	12	15	31	55
	S-20-15	B-1-17	300	1000	20	15	31	50
	Si-20-15	BiL-1-17	300	1100	20	15	31	55
	S-24-15	B-1-17	300	1140	12	10	25	45
					12	15	31	50
	Si-24-15	BiL-1-17	300	1208	12	10	25	48
					12	15	31	55
	A45-10-15	B-1-17	150	500	10	15	31	50
	S-2-PL	B-1PL		80	2	1PL	10	40
Liston C 2202	SiS-4-50	Bi-1-31	200	492	4	50	82	123
	SiS-6-50	Bi-1-31	300	738	6	50	82	123
	SiS-10-15	Bi-1-17	150	540	10	15	31	54
	S-4-100	B-US-45	400	1580	4	100	249	395
		B-UE-45	420	1344	4	105	184	336
	A35-30-15	BiL-1-17	450	1650	30	15	31	55
	SS-2-PL	BS-1PL		160	2	1PL	20	80
Liston C 2203	S-4-250	B-US-65	1000	4200	4	250	580	1050
	Si-2-CC	B-1CC	120		2	60		
Liston C 2204 Classic	Se-4-50	B-1-30	200	440	4	50	75	110
	S-8-15	B-1-17	120	400	8	15	31	50
	Se-12-15	B-1-17	180	600	12	15	31	50
	S-12-GCARD	B-1GCARD		444	12	1GCARD	13	37
	S-20-GCARD	B-1GCARD		740	20	1GCARD	13	37
	S-24-GCARD	B-1GCARD		888	24	1GCARD	13	37

2.10 Максимальные эксплуатационные характеристики бакетов и адаптеров приведены в Таблице 6:

Таблица 6

Наименование Центрифуги	Наименование ротора	Наименование бакета	Наименование адаптера	Диаметр пробирки, мм	Максимальная\минимальная длина пробирки, мм	Радиус Центрифугирования, мм	Макс. скорость, об/мин	Макс. ОЦУ (x g)	
Liston C 2201	S-6-50	B-1-30	-	29	115\101	166	3600	2405	
	Si-6-50	Bi-1-31	-	31	115\101	169	3600	2449	
			TWR-30-1-F		115\101	165		2391	
	SS-10-15	B-1-17	-	17	121\95	167	3600	2420	
			TWR-17-1		100\75	147		2130	
			TWR-16-1-F		121\95	165		2391	
	Si-10-15	BiL-1-17	-	17	121\95	169	3600	2449	
			TWR-17-1		100\75	149		2159	
			TWR-17-1- F		121\95	167		2420	
	S-12-15	B-1-17	-	17	112\95	167	3600	2420	
			TWR-17-1		92\75	147		2130	
			TWR-16-1-F		112\95	165		2391	
	Si-12-15	BiL-1-17	-	17	110\95	168	3600	2434	
			TWR-17-1		90\75	148		2144	
			TWR-17-1-F		110\95	166		2405	
	S-20-15	B-1-17	-	17	121\95	167	3600	2420	
			TWR-17-1		100\75	147		2130	
			TWR-16-1-F		121\95	165		2391	
	Si-20-15	BiL-1-17	-	17	121\95	169	3600	2449	
			TWR-17-1		100\75	149		2159	
			TWR-17-1-F		121\95	167		2420	
	S-24-15	B-1-17	-	17	100\95	167	3600	2420	
			-		121\95			2130	
			TWR-17-1		80\75	147			
			-		100\75				
			TWR-16-1-F		100\75	165		2391	
	Si-24-15	BiL-1-17	-	17	100\95	168	3600	2434	
			-		121\95			2144	
			TWR-17-1		80\75	148			
			-		100\75				
			TWR-17-1-F		100\95	165		2391	
	A45-10-15	B-1-17	-	17	121\95	138	3600	2000	
			TWR-17-1		100\75	118		1710	
			TWR-16-1-F		121\95	136		1961	
	S-2-PL	B-1PL	-	-	-	113	3600	1637	
Liston C 2202	SiS-4-50	Bi-1-31	-	31	115\101	168	4000	3005	
			TWR-30-1-F		115\101	163		2916	
	SiS-6-50	Bi-1-31	-	31	115\101	168	4000	3005	
			TWR-30-1-F		115\101	163		2916	
	SiS-10-15	Bi-1-17	-	17	121\90	162	4000	2898	
			TWR-17-1		100\70	142		2540	
			TWR-17-1-F		121\90	160		2862	
	S-4-100	B-US-45	TASM-11-10	11	92\66	160	4000	2862	
			TASM-12-8	12	40\30	160	4000	2862	
			TASM-13-8	13	92\65	160	4000	2862	
			TASL-13-8	13	100\82	160	4000	2862	

			TASM-16-6	16	85\75	160	4000	2862				
			TASL-16-6	16	102\92	160	4000	2862				
			TASM-17-6	17	85\65	160	4000	2862				
			TASL-17-6	17	105\92	160	4000	2862				
			TASL-17-4-F	17	121\80	160	4000	2862				
			TASL-17-4-FQ	17	121\80	160	4000	2862				
			TASM-21-4	21	85\65	160	4000	2862				
			TASL-21-4	21	105\82	160	4000	2862				
			TASM-22-2	22	40\30	160	4000	2862				
			TASM-26-2	26	85\65	160	4000	2862				
			TASL-26-2	26	105\85	160	4000	2862				
			TASM-26-2-FQ	26	90\65	160	4000	2862				
			TASL-26-2-FQ	26	110\85	160	4000	2862				
			TASM-29-1	29	85\65	160	4000	2862				
			TASL-29-1	29	115\85	160	4000	2862				
			TASL-29-1-FQ	29	115\85	160	4000	2862				
			TASM-30-1	30	85\65	160	4000	2862				
			TASM-31-1	31	85\65	160	4000	2862				
			TASL-31-1	31	105\85	160	4000	2862				
			TASM-34-1	34	85\65	160	4000	2862				
			TASL-34-1	34	105\85	160	4000	2862				
			TASM-38-1	38	85\65	160	4000	2862				
			TASL-38-1	38	106\85	160	4000	2862				
			TWS-45-1	45	120\80	160	4000	2862				
			B-UE-45	TAEM-13-8	13	82\65	160	4000	2862			
				TAEL-13-8	13	110\82	160	4000	2862			
				TAEM-16-7	16	92\65	160	4000	2862			
				TAEL-16-7	16	102\92	160	4000	2862			
				TAEM-17-7	17	80\65	160	4000	2862			
				TAEL-17-7	17	107\80	160	4000	2862			
			A35-30-15	BiL-1-17	-	17	125\95 (20 шт)	127 (10шт)	4000	2272		
								108 (10шт)		1932		
	100\95 (10 шт)	2272										
	TWR-17-1	105\75 (20 шт)			117 (10шт)		2093					
					97 (10шт)		1735					
					117 (10шт)		2093					
	TWR-17-1-F	121\95 (20 шт)			126 (10шт)		2254					
					107 (10шт)		1914					
					100\95 (10 шт)		126 (10 шт)	2254				
	SS-2-PL	BS-1PL			-		-	-		113	4000	2021
Liston C 2203	S-4-250	B-US-65			TASM-13-14		13	85\65		182	3500	2493
					TASL-13-14		13	115\85		182	3500	2493
			TASM-16-12	16	85\65	182	3500	2493				
			TASL-16-12	16	115\85	182	3500	2493				
			TASM-17-12	17	85\65	182	3500	2493				
			TASL-17-12	17	115\85	182	3500	2493				
			TASL-17-8-F	17	121\85	182	3500	2493				
			TASL-17-8-FQ	17	121\85	182	3500	2493				

			TASM-21-7	21	85\65	182	3500	2493
			TASL-21-7	21	115\85	182	3500	2493
			TASM-26-5	25	85\65	182	3500	2493
			TASL-26-5	26	115\85	182	3500	2493
			TASL-26-5-FQ	26	115\85	182	3500	2493
			TASM-29-2	29	85\65	182	3500	2493
			TASL-29-2	29	115\85	182	3500	2493
			TASL-29-2 FQ	29	115\85	182	3500	2493
			TASM-31-2	31	85\65	182	3500	2493
			TASL-31-2	31	115\85	182	3500	2493
			TASM-34-2	34	85\65	182	3500	2493
			TASL-34-2	34	115\85	182	3500	2493
			TASM-38-2	38	85\65	182	3500	2493
			TASL-38-2	38	115\85	182	3500	2493
			TASM-44-1	44	85\65	182	3500	2493
			TASL-44-1	44	115\85	182	3500	2493
			TASL-45-1	45	115\80	182	3500	2493
			TASM-48-1	48	65\45	182	3500	2493
			TASL-48-1	48	115\65	182	3500	2493
			TASM-50-1	50	85\65	182	3500	2493
			TASL-50-1	50	115\85	182	3500	2493
			TASM-54-1	54	95	182	3500	2493
			TASL-54-1	54	96	182	3500	2493
			TASL-55-1	55	115\80	182	3500	2493
			TASL-56-1	56	115\85	182	3500	2493
			TASM-60-1	60	85\65	182	3500	2493
			TASL-60-1	60	115\85	182	3500	2493
			TWS-65-1	65	130\105	182	3500	2493
	Si-2-CC	B-1CC	TAR-17-1	17	163	92	3500	1260
			TAR-21-1	21	194	90	3500	1233
			TAR-28-1	28	114	138	3500	1890
			TAR-32-1	32	154	158	3500	2164
Liston C 2204 Classic	Se-4-50	B-1-30	-	29	125\101	171	2800	1500
	S-8-15	B-1-17	-	17	121\95	162	2800	1420
			TWR-17-1	17	100\75	142	2800	1245
			TWR-16-1-F	17	121\95	160	2800	1402
	Se-12-15	B-1-17	-	17	112\95	167	2800	1467
			TWR-17-1	17	92\75	147	2800	1288
			TWR-16-1-F	17	112\95	165	2800	1446
	S-12-GCARD	B-1GCARD	-	-	-	111	2800	973
	S-20-GCARD	B-1GCARD	-	-	-	108	2800	947
	S-24-GCARD	B-1GCARD	-	-	-	108	2800	947

Примечание: Вычисление значений единиц относительного центробежного ускорения на рабочих частотах установленного ротора производится по формуле:

$$ОЦУ=1,118 \times R \times (N/1000)^2$$

где R - радиус центрифугирования, в миллиметрах,

N – установленная частота вращения ротора, в оборотах в минуту, указанных в Таблице 6.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки Центрифуги соответствует указанному в Таблице 7:

Таблица 7

Наименование	Обозначение документа	Кол-во, штук
1 Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2201 в составе:		
1.1 Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2201;	ТУ 9443-001-89699725 – 2021	1
1.2 Ротор – S-6-50 (при необходимости);	ЦМ.012.290.000	1
1.3 Ротор – Si-6-50 (при необходимости);	ЦМ.012.290.000-01	1
1.4 Ротор – SS-10-15 (при необходимости);	ЦМ.014.186.000-02	1
1.5 Ротор – Si-10-15 (при необходимости);	ЦМ.012.042.000	1
1.6 Ротор – S-12-15;	ЦМ.014.187.000-01	1
1.7 Ротор – Si-12-15 (при необходимости);	ЦМ.012.041.000-01	1
1.8 Ротор – S-20-15 (при необходимости);	ЦМ.014.186.000-01	1
1.9 Ротор – Si-20-15 (при необходимости);	ЦМ.012.043.000	1
1.10 Ротор – S-24-15 (при необходимости);	ЦМ.014.187.000	1
1.11 Ротор – Si-24-15 (при необходимости)	ЦМ.012.041.000	1
1.12 Ротор – A45-10-15 (при необходимости);	ЦМ.015.208.000	1
1.13 Ротор – S-2-PL (при необходимости);	ЦМ.012.044.000	1
1.14 Бакет – B-1-30 (при необходимости);	ЦМ.015.203.006	6
1.15 Бакет - Bi-1-31 (при необходимости);	ЦМ.014.043.006	6
1.16 Бакет - B-1-17;	ЦМ.014.184.006	не более 24
1.17 Бакет - BiL-1-17 (при необходимости);	ЦМ.012.041.006	не более 24
1.18 Бакет - B-1PL (при необходимости);	ЦМ.012.044.002	6
1.19 Адаптеры – TWR-30-1-F(при необходимости);	ЦМ.014.043.003	6
1.20 Адаптеры - TWR-17-1;	ЦМ.015.200.006	не более 24
1.21 Адаптеры - TWR-16-1-F (при необходимости);	ЦМ.012.000.018-01	не более 24
1.22 Адаптеры - TWR-17-1-F (при необходимости);	ЦМ.012.041.004	не более 24
1.23 Сетевой шнур ПВХ-АП S22C13 2,2 м	ГОСТ 28244-96	1
1.24 Принадлежности:		
1.24.1 Вставка плавкая ВПБ6-11 3,15 А	ОЮО.481.021 ТУ	1
1.24.2 Ключ для винтов с внутренним шестигранником 2,5 мм	ГОСТ 11737-93	1
1.25 Эксплуатационная документация:		
1.25.1 Паспорт	ЦМ.012.000.000 ПС	1
1.25.2 Руководство по эксплуатации	ЦМ.012.000.000 РЭ	1
2 Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2202 в составе:		

2.1 Центрифуга лабораторная медицинская Liston C 2202;	ТУ 9443-001-89699725 – 2021	1
2.2 Ротор – SiS-4-50 (при необходимости);	ЦМ.014.045.000	1
2.3 Ротор - SiS-6-50 (при необходимости);	ЦМ.014.043.000	1
2.4 Ротор - SiS-10-15 (при необходимости);	ЦМ.014.042.000	1
2.5 Ротор - S-4-100;	ЦМ.014.041.000	1
2.6 Ротор - A35-30-15 (при необходимости);	ЦМ.014.044.000	1
2.7 Ротор - SS-2-PL (при необходимости);	ЦМ.014.046.000	1
2.8 Бакеты - Bi-1-31 (при необходимости);	ЦМ.014.043.006	не более 6
2.9 Бакеты - Bi-1-17 (при необходимости);	ЦМ.014.042.006	не более 10
2.10 Бакеты - B-US-45;	ЭМ.Ц.5702.00.00.20	4
2.11 Бакеты - B-UE-45 (при необходимости);	ЦМ.014.000.038	4
2.12 Бакеты - BiL-1-17 (при необходимости);	ЦМ.012.041.006	30
2.13 Бакеты - BS-1PL (при необходимости);	ЦМ.015.045.100	2
2.14 Адаптеры – TWR-30-1-F (при необходимости);	ЦМ.014.043.003	не более 6
2.15 Адаптеры - TWR-17-1 (при необходимости);	ЦМ.015.200.006	не более 30
2.16 Адаптеры - TWR-17-1-F (при необходимости);	ЦМ.012.041.004	не более 30
2.17 Адаптеры - TASM-11-10 (при необходимости);	ЦМ.012.211-02	4
2.18 Адаптеры -TASM-12-8 (при необходимости);	ЦМ.012.212.000	4
2.19 Адаптеры - TASM-13-8 (при необходимости);	ЦМ.012.211.000	4
2.20 Адаптеры - TASL-13-8 (при необходимости);	ЦМ.012.211.000-01	4
2.21 Адаптеры – TASM-16-6 (при необходимости);	ЦМ.012.222.000	4
2.22 Адаптеры – TASL-16-6;	ЦМ.012.221.000	4
2.23 Адаптеры – TASM-17-6 (при необходимости);	ЦМ.012.231.000	4
2.24 Адаптеры – TASL-17-6 (при необходимости);	ЦМ.012.231.000-01	4
2.25 Адаптеры – TASL-17-4-F (при необходимости);	ЦМ.012.251.000	4
2.26 Адаптеры – TASL-17-4-FQ (при необходимости);	ЦМ.012.259.000	4
2.27 Адаптеры – TASM-21-4 (при необходимости);	ЦМ.012.253.000	4
2.28 Адаптеры – TASL-21-4 (при необходимости);	ЦМ.012.253.000-01	4
2.29 Адаптеры – TASM-22-2 (при необходимости);	ЦМ.012.264.000	4
2.30 Адаптеры – TASM-26-2 (при необходимости);	ЦМ.012.254.000	4
2.31 Адаптеры – TASL-26-2 (при необходимости);	ЦМ.012.254.000-01	4
2.32 Адаптеры – TASM-26-2-FQ (при необходимости);	ЦМ.012.263.000	4
2.33 Адаптеры – TASL-26-2-FQ (при необходимости);	ЦМ.012.262.000	4
2.34 Адаптеры – TASM-29-1 (при необходимости);	ЦМ.012.255.000	4
2.35 Адаптеры – TASL-29-1 (при необходимости);	ЦМ.012.255.000-01	4
2.36 Адаптеры – TASL-29-1-FQ (при необходимости);	ЦМ.012.260.000	4
2.37 Адаптеры – TASM-30-1 (при необходимости);	ЦМ.012.265.000	4
2.38 Адаптеры – TASM-31-1 (при необходимости);	ЦМ.012.256.000	4
2.39 Адаптеры – TASL-31-1 (при необходимости);	ЦМ.012.256.000-01	4
2.40 Адаптеры – TASM-34-1 (при необходимости);	ЦМ.012.257.000	4
2.41 Адаптеры – TASL-34-1 (при необходимости);	ЦМ.012.257.000-01	4
2.42 Адаптеры – TASM-38-1 (при необходимости);	ЦМ.012.258.000	4

2.43 Адаптеры – TASL-38-1 (при необходимости);	ЦМ.012.258.000-01	4
2.44 Адаптеры – TWS-45-1 (при необходимости);	ЦМ.012.261.000	4
2.45 Адаптеры – ТАЕМ-13-8 (при необходимости);	ЦМ.012.234.000	4
2.46 Адаптеры – ТАЕЛ-13-8 (при необходимости);	ЦМ.012.237.000	4
2.47 Адаптеры – ТАЕМ-16-7 (при необходимости);	ЦМ.012.235.000	4
2.48 Адаптеры – ТАЕЛ-16-7 (при необходимости);	ЦМ.012.233.000	4
2.49 Адаптеры – ТАЕМ-17-7 (при необходимости);	ЦМ.012.236.000	4
2.50 Адаптеры – ТАЕЛ-17-7 (при необходимости);	ЦМ.012.232.000	4
2.51 Сетевой шнур ПВС-АП S22C13 2,2 м;	ГОСТ 28244-96	1
2.52 Принадлежности:		
2.52.1 Вставка плавкая ВПБ6-12 4,0 А;		
2.52.2 Ключ для винтов с внутренним шестигранником 2,5 мм;	ОЮО.481.021 ТУ ГОСТ 11737-93	1
2.53 Эксплуатационная документация:		
2.53.1 Паспорт		1
2.53.2 Руководство по эксплуатации	ЦМ.012.000.000 ПС ЦМ.012.000.000 РЭ	1 1
3 Центрифуга лабораторная медицинская Liston С 2203 в составе:		
3.1 Центрифуга лабораторная медицинская Liston С 2203;	ТУ 9443-001-89699725 – 2021	1
3.2 Ротор – S-4-250;	ЦМ.013.041.000	1
3.3 Ротор - Si-2-CC (при необходимости);	ЦМ.013.044.000	1
3.4 Бакеты – В-US-65;	ЦМ.013.080.001	4
3.5 Бакеты - В-1СС (при необходимости);	ЦМ.013.000.040	2
3.6 Адаптеры –TASM-13-14 (при необходимости);	ЦМ.013.082.000-01	4
3.7 Адаптеры – TASL-13-14 (при необходимости);	ЦМ.013.082.000-01	4
3.8 Адаптеры – TASM-16-12 (при необходимости);	ЦМ.013.083.000-01	4
3.9 Адаптеры – TASL-16-12;	ЦМ.013.083.000	4
3.10 Адаптеры – TASM-17-12 (при необходимости);	ЦМ.013.081.000-01	4
3.11 Адаптеры – TASL-17-12 (при необходимости);	ЦМ.013.081.000	4
3.12 Адаптеры – TASL-17-8-F (при необходимости);	ЦМ.013.099.000	4
3.13 Адаптеры – TASL-17-8-FQ (при необходимости);	ЦМ.013.122.000	4
3.14 Адаптеры – TASM-21-7 (при необходимости);	ЦМ.013.101.000	4
3.15 Адаптеры – TASL-21-7 (при необходимости);	ЦМ.013.101.000-01	4
3.16 Адаптеры – TASM-26-5 (при необходимости);	ЦМ.013.102.000	4
3.17 Адаптеры – TASL-26- 5 (при необходимости);	ЦМ.013.102.000-01	4
3.18 Адаптеры – TASM-26-5-FQ (при необходимости);	ЦМ.013.121.000-01	4
3.19 Адаптеры – TASM-29-2 (при необходимости);	ЦМ.013.103.000	4
3.20 Адаптеры – TASL-29-2 (при необходимости);	ЦМ.013.103.000-01	4
3.21 Адаптеры – TASL-29-2-FQ (при необходимости);	ЦМ.013.123.000	4
3.22 Адаптеры – TASM-31-2 (при необходимости);		

3.23 Адаптеры – TASL-31-2 (при необходимости);	ЦМ.013.104.000	4
3.24 Адаптеры – TASM-34-2 (при необходимости);	ЦМ.013.104.000-01	4
3.25 Адаптеры – TASL-34-2 (при необходимости);	ЦМ.013.105.000	4
3.26 Адаптеры – TASM-38-2 (при необходимости);	ЦМ.013.105.000-01	4
3.27 Адаптеры – TASL-38-2 (при необходимости);	ЦМ.013.106.000	4
3.28 Адаптеры – TASM-44-1 (при необходимости);	ЦМ.013.106.000-01	4
3.29 Адаптеры – TASL-44-1 (при необходимости);	ЦМ.013.100.000-01	4
3.30 Адаптеры – TASL-45-1 (при необходимости);	ЦМ.013.100.000	4
3.31 Адаптеры – TASM-47-1 (при необходимости);	ЦМ.013.086.000	4
3.32 Адаптеры – TASM-48-1 (при необходимости);	ЦМ.013.087.000	4
3.33 Адаптеры – TASL-48-1 (при необходимости);	ЦМ.013.085.000	4
3.34 Адаптеры – TASM-50-1 (при необходимости);	ЦМ.013.092.000	4
3.35 Адаптеры – TASL-50-1 (при необходимости);	ЦМ.013.107.000	4
3.36 Адаптеры – TASM-54-1 (при необходимости);	ЦМ.013.107.000-01	4
3.37 Адаптеры – TASL-54-1 (при необходимости);	ЦМ.013.084.000	4
3.38 Адаптеры – TASM-55-1 (при необходимости);	ЦМ.013.097.000	4
3.39 Адаптеры – TASL-55-1 (при необходимости);	ЦМ.013.108.000	4
3.40 Адаптеры – TASL-56-1 (при необходимости);	ЦМ.013.108.000-01	4
3.41 Адаптеры – TASM-60-1 (при необходимости);	ЦМ.013.124.000	4
3.42 Адаптеры – TASL-60-1 (при необходимости);	ЦМ.013.107.000	4
3.43 Адаптеры – TWS-65-1 (при необходимости);	ЦМ.013.107.000-01	4
3.44 Адаптеры – TAR-17-1 (при необходимости);	ЦМ.013.120.000	4
3.45 Адаптеры – TAR-21-1 (при необходимости);	ЦМ.013.045.000	2
3.46 Адаптеры – TAR-28-1 (при необходимости);	ЦМ.013.046.000	2
3.47 Адаптеры – TAR-32-1 (при необходимости);	ЦМ.013.044.006	2
3.48 Сетевой шнур ПВС-АП S22C13 2,2 м;	ЦМ.013.044.007	2
3.49 Принадлежности:	ГОСТ 28244-96	1
3.49.1 Вставка плавкая ВП 2Б 6,3 А;	АГ 0.481.304 ТУ	
3.49.2 Ключ для винтов с внутренним шестигранником 2,5 мм;	ГОСТ 11737-93	1
3.50 Эксплуатационная документация:		1
3.50.1 Паспорт;	ЦМ.012.000.000 ПС	1
3.50.2 Руководство по эксплуатации.	ЦМ.012.000.000 РЭ	1
4 Центрифуга лабораторная медицинская Liston С 2204 Classic в составе:		
4.1 Центрифуга лабораторная медицинская Liston С 2204;	ТУ 9443-001-89699725 – 2021	1
4.2 Ротор – Se-4-50 (при необходимости);	ЦМ.015.209.000	1
4.3 Ротор – S-8-15 (при необходимости);	ЦМ.015.042.000	1
4.4 Ротор – Se-12-15;	ЦМ.015.040.000	1
4.5 Ротор – S-12-GCARD (при необходимости);	ЦМ.015.046.000	1
4.6 Ротор – S-20-GCARD (при необходимости);	ЦМ.015.046.000-02	1

4.7 Ротор – S-24-GCARD (при необходимости);	ЦМ.015.046.000-01	1
4.8 Бакеты – В-1-30 (при необходимости);	ЦМ.015.203.006	4
4.9 Бакеты – В-1-17;	ЦМ.014.184.006	не более 12
4.10 Бакеты – В-1GCARD (при необходимости);	ЦМ.015.046.003	не более 24
4.11 Адаптеры – TWR-17-1;	ЦМ.015.200.006	12
4.12 Адаптеры – TWR-16-1-F (при необходимости);	ЦМ.012.000.018-01	12
4.13 Сетевой шнур ПВС-АП S22C13 2,2 м;	ГОСТ 28244-96	1
4.14 Принадлежности:	ОЮО.481.021 ТУ	1
4.14.1 Вставка плавкая ВПБ6-10 3,0 А;		
4.15 Эксплуатационная документация:	ЦМ.012.000.000 ПС	1
4.15.1 Паспорт;	ЦМ.015.000.000 РЭ	1
4.15.2 Руководство по эксплуатации.		

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 При транспортировании центрифуг для осуществления гарантийного (послегарантийного) ремонта должны выполняться следующие условия:

4.1.1 Центрифуга в обязательном порядке должна быть продезинфицирована согласно Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (Департамент Госсанэпиднадзора Минздрава России, 30 декабря 1998 г. МУ 287-113) путем протирания рабочей камеры и наружных поверхностей Центрифуги отжатой салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе 3% перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. При этом не допускается использование различных растворителей и бензина.

4.1.2 В штатные резьбовые отверстия снизу центрифуги в обязательном порядке должны быть вкручены шесть транспортировочных винтов, расположенных на днище Центрифуги (четыре транспортировочных винта для Центрифуги С 2204 Classic). Вкручивание производится при аккуратном наклоне Центрифуги с закрытой крышкой набор.

4.1.3 В центрифугу вложен паспорт, рекламационный акт и комплект принадлежностей.

4.1.4 Составные части Центрифуги должны быть предохранены от перемещения прокладками и амортизаторами из гофрированного картона или пенопласта. Сменные, запасные детали и принадлежности фасуются в полиэтиленовые пакеты.

4.1.5 Центрифуга упакована в полиэтиленовый мешок, а затем уложена в деревянный ящик или ящик из пятислойного гофрированного картона с применением штатных ложементов из пенопласта или картона, либо других прокладочных материалов

(гофрированного картона, листового пенопласта, стружки и др.), позволяющих исключить перемещение Центрифуги внутри тары и защищающей ее корпус от внешних ударов;

4.1.6 На ящике должны быть нанесены манипуляционные знаки, которые соответствуют значениям "Беречь от влаги", "Хрупкое, осторожно", "Верх, не кантовать":



4.2 Транспортирование Центрифуги должны осуществлять перевозчики, специализирующиеся на перевозке соответствующих грузов и имеющие надлежащие лицензии (разрешения) и опыт перевозок.

4.3 Отправка Центрифуги производится в транспортной таре любым крытым транспортным средством с обеспечением защиты от воздействия атмосферных осадков и тумана, в том числе предусматриваются:

- прямые перевозки автомобильным транспортом на расстояние до 1 000 км по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничений скорости или со скоростью до 40 км/ч на расстояние до 250 км по булыжным или грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории);

- смешанные перевозки железнодорожным, воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речными видами транспорта, в сочетании их между собой, и автомобильным транспортом, а также перевозки морским транспортом.

4.4 Условия перевозки Центрифуги в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216-78.

4.5 Погрузка и разгрузка Центрифуги должна производиться по ГОСТ 12.3.009-76.

4.6 Размещение и крепление тары в транспортных средствах должно обеспечивать её устойчивое положение, исключать возможность смещения и ударов друг о друга, о стенки транспортной тары и транспортных средств.

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Условия хранения Центрифуги должны соответствовать условиям хранения 2 ГОСТ 15150. Центрифуга в упакованном виде должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50 до плюс 40 °С с относительной влажностью воздуха до 98% при +25 °С.

5.2 Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 После окончания срока службы, при наступлении предельных состояний и решении о непригодности Центрифуги к ремонту и дальнейшей эксплуатации или нецелесообразности

дальнейшей эксплуатации, составные части Центрифуги должны быть демонтированы и утилизированы в установленном порядке в специализированных организациях.

6.2 В конце срока службы в медицинских учреждениях, Центрифуга и ее составные части, кроме пробирок, утилизируются в соответствии с разделом X СанПиН 2.1.3684-21 (для отходов класса А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам), СП 2.1.7.1386-03 и Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

Корпус и другие металлические части Центрифуги подлежат переработке как вторичные ресурсы чёрных и цветных металлов.

6.3 Пробирки с образцами относятся к классу Б (эпидемиологически опасные отходы в соответствии с разделом X СанПиН 2.1.3684-21) и утилизируются с применением аппаратных способов обеззараживания, с применением физических методов и изменения внешнего вида, исключающего возможность их повторного применения.

6.4 Персонал, осуществляющий утилизацию, должен соблюдать правила техники безопасности проведения того или иного способа утилизации.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества Центрифуги лабораторной медицинской настольной Liston C _____ зав.№ _____ требованиям ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ ИЕС 61010-1-2014; ГОСТ ИЕС 61010-2-020-2013; ГОСТ Р МЭК 62304-2013; ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, технических условий ТУ 9443-001-89699725 – 2021 и комплекта конструкторской документации:

- ЦМ.012.000.000 для Центрифуги Liston C 2201;
- ЦМ.014.000.000 для Центрифуги Liston C 2202;
- ЦМ.013.000.000 для Центрифуги Liston C 2203;
- ЦМ.015.000.000 для Центрифуги Liston C 2204 Classic;

при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

7.2 Гарантийный срок службы Центрифуги - 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты отгрузки с предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения Центрифуги – 12 месяцев с даты отгрузки с предприятия-изготовителя.

7.4 Претензии по качеству и комплектности в период гарантийного срока предъявлять предприятию - изготовителю. После ремонта и/или гарантийного обслуживания Центрифуга будет возвращена владельцу в исходном состоянии на момент обратной поставки.

7.5 В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель ремонтирует или заменяет Центрифугу при наличии настоящего паспорта, рекламационного акта, правильно заполненного гарантийного талона и неукоснительного выполнения требований пунктов 1,2, 6, 7, 8 Руководства по эксплуатации Центрифуги.

7.6 Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие изделия и запасные части

устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации Центрифуги и истекает одновременно с истечением срока её гарантии.

7.7 В процессе эксплуатации послегарантийный ремонт Центрифуги осуществляет предприятие - изготовитель на договорной основе.

7.8 Гарантия не распространяется и не устанавливается:

7.8.1 При попытках самостоятельного ремонта без разрешения изготовителя;

7.8.2 На недостатки изделий, которые вызваны несоблюдением прилагаемого Руководства по эксплуатации, транспортными повреждениями, неправильной установкой (в том числе подключением к неправильному напряжению питания), неправильным использованием (включая перегрузку по весу), попаданием внутрь изделия посторонних предметов и другими подобными причинами;

7.8.3 На изделия, которые подвергались конструктивным изменениям неуполномоченными лицами и, если удален, неразборчив или изменен серийный номер изделия;

7.8.4 На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устраненными недостатками, либо возникшими вследствие технического обслуживания или ремонта не уполномоченными организациями, либо ремонт с использованием неоригинальных запасных частей;

7.8.5 На недостатки, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как недопустимые государственными стандартами перепады напряжения питания, при ущербе, причиненном вследствие форс-мажорных обстоятельств (явления природы и стихийные бедствия, пожар, наводнение, военные действия и т.п.);

7.8.6 На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации;

7.8.7 На такие повреждения деталей, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования или которые произошли в результате естественного износа (включая расходные материалы), такие как лампочки, элементы питания, фильтры;

7.8.8 На повреждения вследствие химической или электрохимической реакции, ржавчины, коррозии или воздействия воды, на повреждения вследствие пребывания в необычной (ненадлежащей) окружающей среде;

7.8.9 На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием, оговоренный в Руководстве по эксплуатации.

7.9 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без извещения вносить в конструкцию Центрифуги незначительные изменения (доработки), не влияющие на работоспособность прибора в целом.

Центрифуга лабораторная медицинская

Liston C _____

(обозначение изделия)

(заводской номер изделия)

изготовлена и принята в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020; ГОСТ ИЕС 61010-1-2014; ГОСТ ИЕС 61010-2-020-2013; ГОСТ Р МЭК 62304-2013; ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, технических условий ТУ 28.29.41-005-89699725-2019 и комплекта конструкторской документации:

- ЦМ.012.000.000 для Центрифуги Liston C 2201;
 - ЦМ.014.000.000 для Центрифуги Liston C 2202;
 - ЦМ.013.000.000 для Центрифуги Liston C 2203;
 - ЦМ.015.000.000 для Центрифуги Liston C 2204 Classic
- и признана годной для эксплуатации.

Ответственный за выпуск продукции:_____

должность

личная подпись

расшифровка подписи

« ____ » _____ Г.

дата (число, месяц, год)

Ответственный за технический контроль продукции (ОТК):_____

должность

личная подпись

расшифровка подписи

« ____ » _____ Г.

дата (число, месяц, год)

МП

Центрифуга лабораторная медицинская

Liston C _____

_____ обозначение изделия

_____ заводской номер изделия

упакована согласно ГОСТ 23216-78 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769).

Вариант внутренней упаковки – ВУ-5 по ГОСТ 9.014-78.

Ответственный за упаковывание продукции:

_____ должность

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

« ____ » _____ г.

_____ дата (число, месяц, год)

Ответственный за технический контроль упаковывания (ОТК):

_____ должность

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

« ____ » _____ г.

_____ дата (число, месяц, год)

МП

Центрифуга лабораторная медицинская

Liston C _____

обозначение изделия

заводской номер изделия

введена в эксплуатацию в соответствии с действующей нормативной и технической документацией.

После монтажа проведено полное техническое освидетельствование центрифуги, о чём составлен Акт № _____ от «____» _____ г.
дата (число, месяц, год)

Ответственный за ввод в эксплуатацию продукции:

должность

личная подпись

расшифровка подписи

«____» _____ г.

дата (число, месяц, год)

МП

11 УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 8

Дата	Вид технического обслуживания	Основание	Должность, фамилия и подпись		Примечание
			выполнившего работу	проверившего работу	

12 ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Таблица 9

[illegible]

13 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон №1

Предприятие-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Листон»:

Юридический и фактический адрес: 249191, Россия, Калужская область, г. Жуков, ул.

Сельхозтехника, д. 15. Телефон: +7(4843)972-223, 8(800)350-40-41.

E-mail: info@liston.ru, www.liston.ru.

На гарантийный ремонт Центрифуги лабораторной медицинской

Liston C _____

обозначение изделия

заводской номер изделия

« ____ » _____ г.

дата изготовления

Ответственный за выпуск продукции:

должность

личная подпись

расшифровка подписи

МП

Центрифуга продана:

должность

личная подпись

расшифровка под-

писи

« ____ » _____ г.

дата (число, месяц, год)

МП

Центрифуга введена в эксплуатацию:

должность

личная подпись

расшифровка подписи

« ____ » _____ г.

дата (число, месяц, год)

МП

ЦМ.012.000.000 ПС

Лист

30

Заполняется ремонтным предприятием

Содержание ремонта. Наименование и номер по схеме замененной детали или узла.
Место и характер дефекта:

Центрифуга отремонтирована:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

« ____ » _____ г.
дата (число, месяц, год)

МП Штамп ремонтного предприятия с указанием города.

Подпись владельца изделия, подтверждающая ремонт

_____	_____	_____
_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

« ____ » _____ г.
дата (число, месяц, год)

МП

ЦМ.012.000.000 ПС

Лист

31

Талон №2

Предприятие-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Листон»:
Юридический и фактический адрес: 249191, Россия, Калужская область, г. Жуков, ул.
Сельхозтехника, д. 15. Телефон: +7(4843)972-223, 8(800)350-40-41.
E-mail: info@liston.ru, www.liston.ru.

На гарантийный ремонт Центрифуги лабораторной медицинской

Liston C _____

обозначение изделия

заводской номер изделия

« ____ » _____ г.

дата изготовления

Ответственный за выпуск продукции:

должность

личная подпись

расшифровка подписи

МП

Центрифуга продана:

должность

личная подпись

расшифровка подписи

« ____ » _____ г.

дата (число, месяц, год)

МП

Центрифуга введена в эксплуатацию:

должность

личная подпись

расшифровка подписи

« ____ » _____ г.

дата (число, месяц, год)

МП

Лист

ЦМ.012.000.000 ПС

32

[illegible]

должность личная подпись расшифровка под-
писи

МП Штамп ремонтного предприятия с указанием города.

должность

личная подпись

расшифровка под-
писи

MP

14 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

14.1 Регистрируются все предъявленные рекламации и их краткое содержание.

14.2 В случае отказа в работе центрифуги в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованные сведения о рекламации по форме таблицы 10.

Т а б л и ц а 10

Номер рекламаций	Дата	Содержание рекламации	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Меры, принятые по рекламации	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

П р и м е ч а н и е – Первые четыре графы заполняет эксплуатирующая организация при обнаружении отказов и неисправностей в период гарантийного срока, а последующие графы – завод-изготовитель.

Сведения следует направить предприятию-изготовителю по указанному адресу.

14.3 Ремонт после истечения гарантийного срока может быть проведен сервисной службой предприятия-изготовителя или специализированной организацией.

ЦМ.012.000.000 ПС

Лист

35

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО, СКРЕПЕНО ПЕЧАТЬЮ

36 листа (ов)

Директор ООО «Листон»



Сапрыгин /Сапрыгин С.Н./