

Согласовано/APPROVAL

Medacta International S.A. (Медакта Интернационал С.А.)
Организация/Organization

Strada Regina CH-6874 Castel San Pietro, Switzerland (Страда Реджина
CH-6874 Кастель С. Пьетро Швейцария)
Адрес/Address

Regulatory Legal and Compliance Director
Должность/Occupation

Baj Stefano
Фамилия, Имя/ Surname, Name

30.02.2023

Дата ДД.ММ.ГГГГ/Date DD.MM.YYYY

Подпись/Signature



**Instruction for use for the medical device
Mecta-C spinal endoprosthesis system**

**Инструкция по эксплуатации на медицинское изделие
Система имплантатов Mecta-C для шейного отдела позвоночника**

КОПИЯ

No. 4814 (four thousand eight hundred fourteen)

Lugano (Switzerland), August 31st (thirty-first), 2023 (two thousand twenty-three)-----
I, Monica MARAZZI, the undersigned Notary Public in Lugano (Switzerland) duly commissioned and qualified,
do hereby certify the authenticity of the overleaf signature of:-----

Stefano BAJ, born on June 12th (twelfth), 1980 (nineteen hundred eighty), male, married, Italian citizen,
domiciled in Vedano Olona (Italy), Via Aldo Moro 9/B (nine/B), holder of the Italian Identity Card Nr.
AV6066327 (AV six zero six six three two seven), issued by the Municipality of Vedano Olona, June 11th
(eleventh), 2015 (two thousand fifteen), expiring June 12th (twelfth), 2025 (two thousand twenty-five), -----
whose identity I attest.-----

In witness whereof I subscribe and affix my official seal.-----

Monica MARAZZI, Public Notary duly qualified to practice by the Commission for Notaries of the Court of
Appeal of the Canton of Ticino, Lugano, Switzerland, via Cantonale 19 (nineteen), 6901 Lugano (Switzerland),
tel. nr. +41/91.922.74.06, monica.marazzi@mlegal.ch.-----



[Handwritten signature of Stefano BAJ]

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)
Il presente atto pubblico
2. è stato firmato da.....**Monica Marazzi**.....
3. operante in qualità di.....**Notaio**.....
4. è munito del sigillo/bollo di**Notaio**.....

Attestato

5. in Bellinzona
6. il **1 settembre 2023**
7. da Cancelleria dello Stato
8. col numero**73998**.....
9. Sigillo/bollo
10. firma



[Handwritten signature of Roberta Martinoli]
ROBERTA MARTINOLI
Segretaria

Tassa Fr. 35.-

Russian text	English text
1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ (МИ) И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ	1. MEDICAL DEVICE (MD) NAME AND CLASSIFICATION
1.1. Наименование МИ, модели или варианты исполнения МИ	1.1. MD name, models or variations of MD

Система имплантатов Места-С для шейного отдела позвоночника /Mesta-C implant system for the cervical spine:

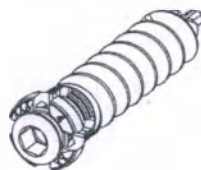


Рис.1 Винт шейный самосверлящий (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.), варианты исполнения;; Винт нарезной фиксированный (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.), варианты исполнения / Fig.1 Variable self-drilling screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack.), versions; Fixed self-drilling screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack.), versions

Номер по каталогу	Название	Catalogue Number	Description
03.70.001	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм	03.70.001	Variable self-drilling screw diam. 4x12mm
03.70.002	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 13мм	03.70.002	Variable self-drilling screw diam. 4x13mm
03.70.003	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм	03.70.003	Variable self-drilling screw diam. 4x14mm
03.70.004	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 15мм	03.70.004	Variable self-drilling screw diam. 4x15mm
03.70.005	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм	03.70.005	Variable self-drilling screw diam. 4x16mm
03.70.006	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 17мм	03.70.006	Variable self-drilling screw diam. 4x17mm
03.70.007	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм	03.70.007	Variable self-drilling screw diam. 4x18mm
03.70.008	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 19мм	03.70.008	Variable self-drilling screw diam. 4x19mm
03.70.009	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 20мм	03.70.009	Variable self-drilling screw diam. 4x20mm
03.70.010	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 21мм	03.70.010	Variable self-drilling screw diam. 4x21mm
		03.70.011	Variable self-drilling screw diam. 4x22mm
		03.70.014	Variable self-drilling screw diam. 4x12mm
		03.70.015	Variable self-drilling screw diam. 4x13mm
		03.70.016	Variable self-drilling screw diam. 4x14mm
		03.70.017	Variable self-drilling screw diam. 4x15mm
		03.70.018	Variable self-drilling screw diam. 4x16mm
		03.70.019	Variable self-drilling screw diam. 4x17mm
		03.70.020	Variable self-drilling screw diam. 4x18mm


03.70.011	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм
03.70.014	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм
03.70.015	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 13мм
03.70.016	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм
03.70.017	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 15мм
03.70.018	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм
03.70.019	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 17мм
03.70.020	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм
03.70.021	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 19мм
03.70.022	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 20мм
03.70.023	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 21мм
03.70.024	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм
03.70.027	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм
03.70.028	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 13мм
03.70.029	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм
03.70.030	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 15мм
03.70.031	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм
03.70.032	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 17мм
03.70.033	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм

03.70.021	Variable self-drilling screw diam. 4x19mm
03.70.022	Variable self-drilling screw diam. 4x20mm
03.70.023	Variable self-drilling screw diam. 4x21mm
03.70.024	Variable self-drilling screw diam. 4x22mm
03.70.027	Variable self-drilling screw diam. 4x12mm
03.70.028	Variable self-drilling screw diam. 4x13mm
03.70.029	Variable self-drilling screw diam. 4x14mm
03.70.030	Variable self-drilling screw diam. 4x15mm
03.70.031	Variable self-drilling screw diam. 4x16mm
03.70.032	Variable self-drilling screw diam. 4x17mm
03.70.033	Variable self-drilling screw diam. 4x18mm
03.70.034	Variable self-drilling screw diam. 4x19mm
03.70.035	Variable self-drilling screw diam. 4x20mm
03.70.036	Variable self-drilling screw diam. 4x21mm
03.70.037	Variable self-drilling screw diam. 4x22mm
03.70.140	Fixed self-drilling screw diam. 4x12mm
03.70.141	Fixed self-drilling screw diam. 4x13mm
03.70.142	Fixed self-drilling screw diam. 4x14mm
03.70.143	Fixed self-drilling screw diam. 4x15mm
03.70.144	Fixed self-drilling screw diam. 4x16mm
03.70.145	Fixed self-drilling screw diam. 4x17mm
03.70.146	Fixed self-drilling screw diam. 4x18mm
03.70.147	Fixed self-drilling screw diam. 4x19mm
03.70.148	Fixed self-drilling screw diam. 4x20mm
03.70.149	Fixed self-drilling screw diam. 4x21mm
03.70.150	Fixed self-drilling screw diam. 4x22mm
03.70.153	Fixed self-drilling screw diam. 4x12mm
03.70.154	Fixed self-drilling screw diam. 4x13mm
03.70.155	Fixed self-drilling screw diam. 4x14mm
03.70.156	Fixed self-drilling screw diam. 4x15mm
03.70.157	Fixed self-drilling screw diam. 4x16mm
03.70.158	Fixed self-drilling screw diam. 4x17mm
03.70.159	Fixed self-drilling screw diam. 4x18mm
03.70.160	Fixed self-drilling screw diam. 4x19mm
03.70.161	Fixed self-drilling screw diam. 4x20mm

03.70.034	Винт костный шейный, сам сверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 19мм
03.70.035	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 20мм
03.70.036	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 21мм
03.70.037	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм
03.70.140	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 12мм
03.70.141	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 13мм
03.70.142	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 14мм
03.70.143	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 15мм
03.70.144	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 16мм
03.70.145	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 17мм
03.70.146	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 18мм
03.70.147	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 19мм
03.70.148	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 20мм
03.70.149	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 21мм
03.70.150	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 22мм
03.70.153	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 12мм
03.70.154	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 13мм
03.70.155	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 14мм
03.70.156	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 15мм

03.70.162	Fixed self-drilling screw diam. 4x21mm
03.70.163	Fixed self-drilling screw diam. 4x22mm
03.70.166	Fixed self-drilling screw diam. 4x12mm
03.70.167	Fixed self-drilling screw diam. 4x13mm
03.70.168	Fixed self-drilling screw diam. 4x14mm
03.70.169	Fixed self-drilling screw diam. 4x15mm
03.70.170	Fixed self-drilling screw diam. 4x16mm
03.70.171	Fixed self-drilling screw diam. 4x17mm
03.70.172	Fixed self-drilling screw diam. 4x18mm
03.70.173	Fixed self-drilling screw diam. 4x19mm
03.70.174	Fixed self-drilling screw diam. 4x20mm
03.70.175	Fixed self-drilling screw diam. 4x21mm
03.70.176	Fixed self-drilling screw diam. 4x22mm

03.70.157	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 16мм
03.70.158	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 17мм
03.70.159	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 18мм
03.70.160	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 19мм
03.70.161	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 20мм
03.70.162	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 21мм
03.70.163	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 22мм
03.70.166	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 12мм
03.70.167	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 13мм
03.70.168	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 14мм
03.70.169	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 15мм
03.70.170	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 16мм
03.70.171	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 17мм
03.70.172	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 18мм
03.70.173	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 19мм
03.70.174	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 20мм
03.70.175	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 21мм
03.70.176	Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 22мм

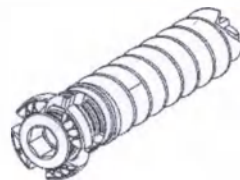

1.1.Рис.2 Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.) варианты исполнения; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.) варианты исполнения:/ Fig.2 Variable self-tapping screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack.), versions; Fixed self-tapping screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack.), versions

Номер по каталогу	Название	Catalogue Number	Description
03.70.040	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм	03.70.040	Variable self-tapping screw diam. 4x12mm
03.70.041	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 13мм	03.70.041	Variable self-tapping screw diam. 4x13mm
03.70.042	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм	03.70.042	Variable self-tapping screw diam. 4x14mm
03.70.043	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 15мм	03.70.043	Variable self-tapping screw diam. 4x15mm
03.70.044	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм	03.70.044	Variable self-tapping screw diam. 4x16mm
03.70.045	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 17мм	03.70.045	Variable self-tapping screw diam. 4x17mm
03.70.046	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм	03.70.046	Variable self-tapping screw diam. 4x18mm
03.70.047	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 19мм	03.70.047	Variable self-tapping screw diam. 4x19mm
03.70.048	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 20мм	03.70.048	Variable self-tapping screw diam. 4x20mm
03.70.049	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 21мм	03.70.049	Variable self-tapping screw diam. 4x21mm
03.70.050	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм	03.70.050	Variable self-tapping screw diam. 4x22mm
03.70.053	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм	03.70.053	Variable self-tapping screw diam. 4x12mm
03.70.054	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 13мм	03.70.054	Variable self-tapping screw diam. 4x13mm
		03.70.055	Variable self-tapping screw diam. 4x14mm
		03.70.056	Variable self-tapping screw diam. 4x15mm
		03.70.057	Variable self-tapping screw diam. 4x16mm
		03.70.058	Variable self-tapping screw diam. 4x17mm
		03.70.059	Variable self-tapping screw diam. 4x18mm
		03.70.060	Variable self-tapping screw diam. 4x19mm
		03.70.061	Variable self-tapping screw diam. 4x20mm
		03.70.062	Variable self-tapping screw diam. 4x21mm
		03.70.063	Variable self-tapping screw diam. 4x22mm
		03.70.065	Variable self-tapping screw diam. 4x12mm
		03.70.066	Variable self-tapping screw diam. 4x13mm

03.70.055	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм	03.70.067	Variable self-tapping screw diam. 4x14mm
03.70.056	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 15мм	03.70.068	Variable self-tapping screw diam. 4x15mm
03.70.057	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм	03.70.069	Variable self-tapping screw diam. 4x16mm
03.70.058	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 17мм	03.70.070	Variable self-tapping screw diam. 4x17mm
03.70.059	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм	03.70.071	Variable self-tapping screw diam. 4x18mm
03.70.060	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 19мм	03.70.072	Variable self-tapping screw diam. 4x19mm
03.70.061	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 20мм	03.70.073	Variable self-tapping screw diam. 4x20mm
03.70.062	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 21мм	03.70.074	Variable self-tapping screw diam. 4x21mm
03.70.063	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм	03.70.075	Variable self-tapping screw diam. 4x22mm
03.70.065	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм	03.70.260	Fixed self-tapping screw diam. 4x12mm
03.70.066	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 13мм	03.70.261	Fixed self-tapping screw diam. 4x13mm
03.70.067	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм	03.70.262	Fixed self-tapping screw diam. 4x14mm
03.70.068	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 15мм	03.70.263	Fixed self-tapping screw diam. 4x15mm
03.70.069	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм	03.70.264	Fixed self-tapping screw diam. 4x16mm
03.70.070	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 17мм	03.70.265	Fixed self-tapping screw diam. 4x17mm
03.70.071	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм	03.70.266	Fixed self-tapping screw diam. 4x18mm
03.70.072	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 19мм	03.70.267	Fixed self-tapping screw diam. 4x19mm
03.70.073	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 20мм	03.70.268	Fixed self-tapping screw diam. 4x20mm
03.70.074	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 21мм	03.70.269	Fixed self-tapping screw diam. 4x21mm
		03.70.270	Fixed self-tapping screw diam. 4x22mm
		03.70.273	Fixed self-tapping screw diam. 4x12mm
		03.70.274	Fixed self-tapping screw diam. 4x13mm
		03.70.275	Fixed self-tapping screw diam. 4x14mm
		03.70.276	Fixed self-tapping screw diam. 4x15mm
		03.70.277	Fixed self-tapping screw diam. 4x16mm
		03.70.278	Fixed self-tapping screw diam. 4x17mm
		03.70.279	Fixed self-tapping screw diam. 4x18mm
		03.70.280	Fixed self-tapping screw diam. 4x19mm
		03.70.281	Fixed self-tapping screw diam. 4x20mm
		03.70.282	Fixed self-tapping screw diam. 4x21mm
		03.70.283	Fixed self-tapping screw diam. 4x22mm
		03.70.286	Fixed self-tapping screw diam. 4x12mm
		03.70.287	Fixed self-tapping screw diam. 4x13mm
		03.70.288	Fixed self-tapping screw diam. 4x14mm
		03.70.289	Fixed self-tapping screw diam. 4x15mm

03.70.075	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм
03.70.260	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм
03.70.261	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 13мм
03.70.262	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм
03.70.263	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 15мм
03.70.264	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм
03.70.265	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 17мм
03.70.266	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм
03.70.267	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 19мм
03.70.268	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 20мм
03.70.269	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 21мм
03.70.270	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм
03.70.273	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм
03.70.274	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 13мм
03.70.275	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм
03.70.276	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 15мм
03.70.277	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм
03.70.278	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 17мм
03.70.279	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм

03.70.290	Fixed self-tapping screw diam. 4x16mm
03.70.291	Fixed self-tapping screw diam. 4x17mm
03.70.292	Fixed self-tapping screw diam. 4x18mm
03.70.293	Fixed self-tapping screw diam. 4x19mm
03.70.294	Fixed self-tapping screw diam. 4x20mm
03.70.295	Fixed self-tapping screw diam. 4x21mm
03.70.296	Fixed self-tapping screw diam. 4x22mm

03.70.280	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 19мм
03.70.281	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 20мм
03.70.282	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 21мм
03.70.283	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм
03.70.286	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм
03.70.287	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 13мм
03.70.288	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм
03.70.289	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 15мм
03.70.290	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм
03.70.291	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 17мм
03.70.292	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм
03.70.293	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 19мм
03.70.294	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 20мм
03.70.295	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 21мм
03.70.296	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм

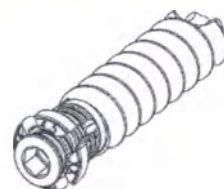


Рис.3 Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол (1 шт./уп., 2 шт./уп. и 4 шт./уп.), варианты исполнения ; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.), варианты исполнения / Fig.3 Variable self-tapping screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack..), versions; Fixed self-tapping screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack.), versions

Номер по каталогу	Название	Catalogue Number	Description
03.70.078	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 12мм	03.70.078	Variable self-tapping screw diam. 4.5x12mm
03.70.080	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 14мм	03.70.080	Variable self-tapping screw diam. 4.5x14mm
03.70.082	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 16мм	03.70.082	Variable self-tapping screw diam. 4.5x16mm
03.70.084	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 18мм	03.70.084	Variable self-tapping screw diam. 4.5x18mm
03.70.086	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 20мм	03.70.086	Variable self-tapping screw diam. 4.5x20mm
03.70.088	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22мм	03.70.088	Variable self-tapping screw diam. 4.5x22mm
03.70.092	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 12мм	03.70.092	Variable self-tapping screw diam. 4.5x12mm
03.70.094	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 14мм	03.70.094	Variable self-tapping screw diam. 4.5x14mm
03.70.096	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 16мм	03.70.096	Variable self-tapping screw diam. 4.5x16mm
03.70.098	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 18мм	03.70.098	Variable self-tapping screw diam. 4.5x18mm
03.70.100	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 20мм	03.70.100	Variable self-tapping screw diam. 4.5x20mm
03.70.102	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22мм	03.70.102	Variable self-tapping screw diam. 4.5x22mm
03.70.106	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 12мм	03.70.106	Variable self-tapping screw diam. 4.5x12mm
03.70.108	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 14мм	03.70.108	Variable self-tapping screw diam. 4.5x14mm
03.70.110	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 16мм	03.70.110	Variable self-tapping screw diam. 4.5x16mm
03.70.112	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 18мм	03.70.112	Variable self-tapping screw diam. 4.5x18mm
		03.70.114	Variable self-tapping screw diam. 4.5x20mm
		03.70.116	Variable self-tapping screw diam. 4.5x22mm
		03.70.390	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x12mm
		03.70.392	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x14mm
		03.70.394	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x16mm
		03.70.396	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x18mm
		03.70.398	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x20mm
		03.70.400	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x22mm
		03.70.404	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x12mm
		03.70.406	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x14mm
		03.70.408	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x16mm
		03.70.410	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x18mm
		03.70.412	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x20mm

03.70.114	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 20мм
03.70.116	Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22мм
03.70.390	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 12мм
03.70.392	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 14мм
03.70.394	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 16мм
03.70.396	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 18мм
03.70.398	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 20мм
03.70.400	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22мм
03.70.404	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 12мм
03.70.406	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 14мм
03.70.408	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 16мм
03.70.410	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 18мм
03.70.412	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 20мм
03.70.414	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22мм
03.70.418	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 12мм
03.70.420	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 14мм
03.70.422	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 16мм
03.70.424	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 18мм
03.70.426	Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 20мм

03.70.414	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x22mm
03.70.418	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x12mm
03.70.420	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x14mm
03.70.422	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x16mm
03.70.424	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x18mm
03.70.426	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x20mm
03.70.428	Fixed self-tapping screw diam. 4.5x22mm

03.70.428	Винт костный шейный, сагittal, резающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22мм	
-----------	---	--



Рис.4 Пластина шейная одноуровневая / Fig.4 Cervical Plate L1

Номер по каталогу	Название	Catalogue Number	Description
03.70.120	Пластина шейная одноуровневая 20мм	03.70.120	Cervical Plate L1x20mm
03.70.122	Пластина шейная одноуровневая 22мм	03.70.122	Cervical Plate L1x22mm
03.70.124	Пластина шейная одноуровневая 24мм	03.70.124	Cervical Plate L1x24mm
03.70.126	Пластина шейная одноуровневая 26мм	03.70.126	Cervical Plate L1x26mm
03.70.128	Пластина шейная одноуровневая 28мм	03.70.128	Cervical Plate L1x28mm
03.70.130	Пластина шейная одноуровневая 30мм	03.70.130	Cervical Plate L1x30mm
03.70.132	Пластина шейная одноуровневая 32мм	03.70.132	Cervical Plate L1x32mm
03.70.134	Пластина шейная одноуровневая 34мм	03.70.134	Cervical Plate L1x34mm

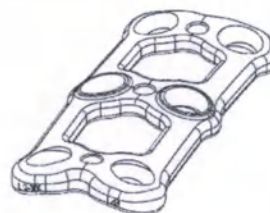


Рис.5 Пластина шейная двухуровневая / Fig.5 Cervical Plate L2

Номер по каталогу	Название	Catalogue Number	Description
03.70.234	Пластина шейная двухуровневая 34мм	03.70.234	Cervical Plate L2x34mm
03.70.237	Пластина шейная двухуровневая 37мм	03.70.237	Cervical Plate L2x37mm
03.70.240	Пластина шейная двухуровневая 40мм	03.70.240	Cervical Plate L2x40mm
03.70.243	Пластина шейная двухуровневая 43мм	03.70.243	Cervical Plate L2x43mm
03.70.246	Пластина шейная двухуровневая 46мм	03.70.246	Cervical Plate L2x46mm
03.70.249	Пластина шейная двухуровневая 49мм	03.70.249	Cervical Plate L2x49mm
03.70.252	Пластина шейная двухуровневая 52мм	03.70.252	Cervical Plate L2x52mm



Рис.6 Пластина шейная трехуровневая / Fig.6 Cervical Plate L3

Номер по каталогу	Название	Catalogue Number	Description
03.70.352	Пластина шейная трехуровневая 52мм	03.70.352	Cervical Plate L3x52mm
03.70.355	Пластина шейная трехуровневая 55мм	03.70.355	Cervical Plate L3x55mm
03.70.358	Пластина шейная трехуровневая 58мм	03.70.358	Cervical Plate L3x58mm
03.70.361	Пластина шейная трехуровневая 61мм	03.70.361	Cervical Plate L3x61mm
03.70.364	Пластина шейная трехуровневая 64мм	03.70.364	Cervical Plate L3x64mm
03.70.367	Пластина шейная трехуровневая 67мм	03.70.367	Cervical Plate L3x67mm
03.70.370	Пластина шейная трехуровневая 70мм	03.70.370	Cervical Plate L3x70mm
03.70.373	Пластина шейная трехуровневая 73мм	03.70.373	Cervical Plate L3x73mm
03.70.376	Пластина шейная трехуровневая 76мм	03.70.376	Cervical Plate L3x76mm



Рис.7 Пластина шейная четырехуровневая / Fig.7 Cervical Plate L4

Номер по каталогу	Название	Catalogue Number	Description
03.70.468	Пластина шейная четырехуровневая 68мм	03.70.468	Cervical Plate L4x68mm
03.70.472	Пластина шейная четырехуровневая 72мм	03.70.472	Cervical Plate L4x72mm
03.70.476	Пластина шейная четырехуровневая 76мм	03.70.476	Cervical Plate L4x76mm
03.70.480	Пластина шейная четырехуровневая 80мм	03.70.480	Cervical Plate L4x80mm
03.70.484	Пластина шейная четырехуровневая 84мм	03.70.484	Cervical Plate L4x84mm
03.70.488	Пластина шейная четырехуровневая 88мм	03.70.488	Cervical Plate L4x88mm
03.70.492	Пластина шейная четырехуровневая 92мм	03.70.492	Cervical Plate L4x92mm

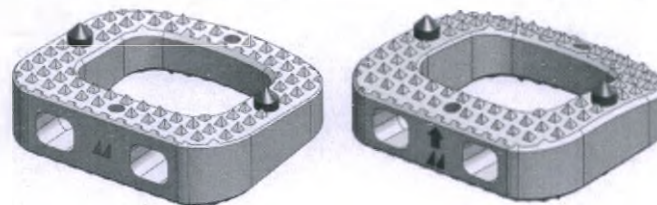


Рис.8 Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° с Тi метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° с Тi метками / Fig.8 Cervical Interbody Fusion Device “Flat” L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” L5°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” L5°- Ti markers

Номер по каталогу	Название	Catalogue Number	Description
03.28.401	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x4	03.28.401	Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x4 L7°
03.28.402	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x5	03.28.402	Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x5 L7°
03.28.403	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x6	03.28.403	Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x6 L7°
03.28.404	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x7	03.28.404	Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x7 L7°
03.28.405	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x8	03.28.405	Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x8 L7°
03.28.406	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x9	03.28.406	Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x9 L7°
03.28.407	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x4	03.28.407	Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x4 L7°
03.28.408	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x5	03.28.408	Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x5 L7°
03.28.409	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x6	03.28.409	Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x6 L7°
03.28.410	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x7	03.28.410	Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x7 L7°
03.28.411	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x8	03.28.411	Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x8 L7°
03.28.412	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x9	03.28.412	Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x9 L7°
03.28.413	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x4	03.28.413	Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x4 L7°

03.28.414	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x5	03.28.414	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x5 L7°
03.28.415	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x6	03.28.415	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x6 L7°
03.28.416	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x7	03.28.416	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x7 L7°
03.28.417	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x8	03.28.417	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x8 L7°
03.28.418	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x9	03.28.418	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x9 L7°
03.28.419	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x4	03.28.419	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x4 L7°
03.28.420	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x5	03.28.420	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x5 L7°
03.28.421	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x6	03.28.421	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x6 L7°
03.28.422	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x7	03.28.422	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x7 L7°
03.28.423	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x8	03.28.423	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x8 L7°
03.28.424	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x9	03.28.424	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x9 L7°
03.28.425	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x4	03.28.425	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x4 L7°
03.28.426	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x5	03.28.426	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x5 L7°
03.28.427	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x6	03.28.427	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x6 L7°
03.28.428	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x7	03.28.428	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x7 L7°
03.28.429	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x8	03.28.429	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x8 L7°
03.28.430	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x9	03.28.430	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x9 L7°
03.28.501	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x4	03.28.501	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x4 L5°
03.28.502	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x5	03.28.502	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x5 L5°

03.28.503	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x6	03.28.503	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x6 L5°
03.28.504	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x7	03.28.504	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x7 L5°
03.28.505	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x8	03.28.505	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x8 L5°
03.28.506	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x9	03.28.506	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x9 L5°
03.28.507	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x4	03.28.507	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x4 L5°
03.28.508	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x5	03.28.508	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x5 L5°
03.28.509	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x6	03.28.509	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x6 L5°
03.28.510	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x7	03.28.510	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x7 L5°
03.28.511	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x8	03.28.511	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x8 L5°
03.28.512	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x9	03.28.512	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x9 L5°
03.28.513	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x4	03.28.513	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x4 L5°
03.28.514	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x5	03.28.514	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x5 L5°
03.28.515	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x6	03.28.515	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x6 L5°
03.28.516	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x7	03.28.516	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x7 L5°
03.28.517	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x8	03.28.517	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x8 L5°
03.28.518	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x9	03.28.518	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x9 L5°
03.28.519	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x4	03.28.519	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x4 L5°
03.28.520	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x5	03.28.520	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x5 L5°
03.28.521	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x6	03.28.521	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x6 L5°

03.28.522	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x7	03.28.522	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x7 L5°
03.28.523	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x8	03.28.523	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x8 L5°
03.28.524	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x9	03.28.524	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x9 L5°
03.28.525	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x4	03.28.525	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 15x18x4 L5°
03.28.526	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x5	03.28.526	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 15x18x5 L5°
03.28.527	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x6	03.28.527	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 15x18x6 L5°
03.28.528	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x7	03.28.528	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 15x18x7 L5°
03.28.529	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x8	03.28.529	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 15x18x8 L5°
03.28.530	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x9	03.28.530	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 15x18x9 L5°
03.28.001	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x4 с Ti метками	03.28.001	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x4 L7°- Ti markers
03.28.002	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x5 с Ti метками	03.28.002	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x5 L7°- Ti markers
03.28.003	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x6 с Ti метками	03.28.003	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x6 L7°- Ti markers
03.28.004	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x7 с Ti метками	03.28.004	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x7 L7°- Ti markers
03.28.005	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x8 с Ti метками	03.28.005	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x8 L7°- Ti markers
03.28.006	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x9 с Ti метками	03.28.006	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x9 L7°- Ti markers
03.28.007	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x4 с Ti метками	03.28.007	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x4 L7°- Ti markers
03.28.008	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x5 с Ti метками	03.28.008	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x5 L7°- Ti markers
03.28.009	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x6 с Ti метками	03.28.009	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x6 L7°- Ti markers
03.28.010	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x7 с Ti метками	03.28.010	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x7 L7°- Ti markers

03.28.011	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x8 с Ti метками	03.28.011	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x8 L7°- Ti markers
03.28.012	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x9 с Ti метками	03.28.012	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x9 L7°- Ti markers
03.28.013	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x4 с Ti метками	03.28.013	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x4 L7°- Ti markers
03.28.014	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x5 с Ti метками	03.28.014	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x5 L7°- Ti markers
03.28.015	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x6 с Ti метками	03.28.015	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x6 L7°- Ti markers
03.28.016	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x7 с Ti метками	03.28.016	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x7 L7°- Ti markers
03.28.017	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x8 с Ti метками	03.28.017	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x8 L7°- Ti markers
03.28.018	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x9 с Ti метками	03.28.018	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x9 L7°- Ti markers
03.28.019	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x4 с Ti метками	03.28.019	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x4 L7°- Ti markers
03.28.020	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x5 с Ti метками	03.28.020	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x5 L7°- Ti markers
03.28.021	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x6 с Ti метками	03.28.021	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x6 L7°- Ti markers
03.28.022	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x7 с Ti метками	03.28.022	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x7 L7°- Ti markers
03.28.023	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x8 с Ti метками	03.28.023	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x8 L7°- Ti markers
03.28.024	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x9 с Ti метками	03.28.024	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x9 L7°- Ti markers
03.28.025	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x4 с Ti метками	03.28.025	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x4 L7°- Ti markers
03.28.026	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x5 с Ti метками	03.28.026	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x5 L7°- Ti markers
03.28.027	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x6 с Ti метками	03.28.027	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x6 L7°- Ti markers
03.28.028	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x7 с Ti метками	03.28.028	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x7 L7°- Ti markers
03.28.029	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x8 с Ti метками	03.28.029	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x8 L7°- Ti markers

03.28.030	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x9 с Ti метками	03.28.030	Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x9 L7°- Ti markers
03.28.101	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x4 с Ti метками	03.28.101	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x4 L5°- Ti markers
03.28.102	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x5 с Ti метками	03.28.102	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x5 L5°- Ti markers
03.28.103	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x6 с Ti метками	03.28.103	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x6 L5°- Ti markers
03.28.104	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x7 с Ti метками	03.28.104	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x7 L5°- Ti markers
03.28.105	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x8 с Ti метками	03.28.105	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x8 L5°- Ti markers
03.28.106	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x9 с Ti метками	03.28.106	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x9 L5°- Ti markers
03.28.107	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x4 с Ti метками	03.28.107	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x4 L5°- Ti markers
03.28.108	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x5 с Ti метками	03.28.108	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x5 L5°- Ti markers
03.28.109	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x6 с Ti метками	03.28.109	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x6 L5°- Ti markers
03.28.110	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x7 с Ti метками	03.28.110	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x7 L5°- Ti markers
03.28.111	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x8 с Ti метками	03.28.111	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x8 L5°- Ti markers
03.28.112	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x9 с Ti метками	03.28.112	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x9 L5°- Ti markers
03.28.113	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x4 с Ti метками	03.28.113	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers
03.28.114	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x5 с Ti метками	03.28.114	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x5 L5°- Ti markers
03.28.115	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x6 с Ti метками	03.28.115	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x6 L5°- Ti markers
03.28.116	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x7 с Ti метками	03.28.116	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x7 L5°- Ti markers
03.28.117	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x8 с Ti метками	03.28.117	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x8 L5°- Ti markers
03.28.118	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x9 с Ti метками	03.28.118	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x9 L5°- Ti markers

03.28.119	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x4 с Ti метками	03.28.119	Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x16x4 L5°- Ti markers
03.28.120	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x5 с Ti метками	03.28.120	Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x16x5 L5°- Ti markers
03.28.121	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x6 с Ti метками	03.28.121	Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x16x6 L5°- Ti markers
03.28.122	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x7 с Ti метками	03.28.122	Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x16x7 L5°- Ti markers
03.28.123	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x8 с Ti метками	03.28.123	Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x16x8 L5°- Ti markers
03.28.124	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x9 с Ti метками	03.28.124	Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x16x9 L5°- Ti markers
03.28.125	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x4 с Ti метками	03.28.125	Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 15x18x4 L5°- Ti markers
03.28.126	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x5 с Ti метками	03.28.126	Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 15x18x5 L5°- Ti markers
03.28.127	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x6 с Ti метками	03.28.127	Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 15x18x6 L5°- Ti markers
03.28.128	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x7 с Ti метками	03.28.128	Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 15x18x7 L5°- Ti markers
03.28.129	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x8 с Ti метками	03.28.129	Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 15x18x8 L5°- Ti markers
03.28.130	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x9 с Ti метками	03.28.130	Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 15x18x9 L5°- Ti markers

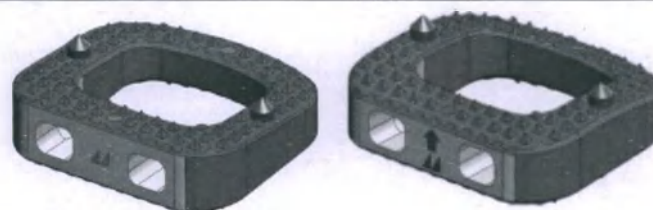


Рис.9 Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK с Ti метками / Fig.9 Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x14x4 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x14x4 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x14x4 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x14x4 L5°- Ti markers

Номер по каталогу	Название	Catalogue Number	Description
-------------------	----------	------------------	-------------

03.28.601	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x4
03.28.602	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x5
03.28.603	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x6
03.28.604	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x7
03.28.605	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x8
03.28.606	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x9
03.28.607	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x4
03.28.608	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x5
03.28.609	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x6
03.28.610	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x7
03.28.611	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x8
03.28.612	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x9
03.28.613	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x4
03.28.614	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x5
03.28.615	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x6
03.28.616	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x7
03.28.617	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x8
03.28.618	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x9
03.28.619	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x4

03.28.601	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x4 L7°
03.28.602	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x5 L7°
03.28.603	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x6 L7°
03.28.604	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x7 L7°
03.28.605	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x8 L7°
03.28.606	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x9 L7°
03.28.607	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x4 L7°
03.28.608	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x5 L7°
03.28.609	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x6 L7°
03.28.610	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x7 L7°
03.28.611	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x8 L7°
03.28.612	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x9 L7°
03.28.613	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x16x4 L7°
03.28.614	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x16x5 L7°
03.28.615	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x16x6 L7°
03.28.616	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x16x7 L7°
03.28.617	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x16x8 L7°
03.28.618	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x16x9 L7°
03.28.619	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x4 L7°

03.28.620	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x5	03.28.620	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x5 L7°
03.28.621	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x6	03.28.621	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x6 L7°
03.28.622	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x7	03.28.622	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x7 L7°
03.28.623	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x8	03.28.623	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x8 L7°
03.28.624	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x9	03.28.624	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x9 L7°
03.28.625	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x4	03.28.625	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x4 L7°
03.28.626	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x5	03.28.626	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x5 L7°
03.28.627	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x6	03.28.627	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x6 L7°
03.28.628	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x7	03.28.628	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x7 L7°
03.28.629	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x8	03.28.629	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x8 L7°
03.28.630	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x9	03.28.630	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x9 L7°
03.28.701	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x4	03.28.701	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x4 L5°
03.28.702	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x5	03.28.702	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x5 L5°
03.28.703	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x6	03.28.703	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x6 L5°
03.28.704	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x7	03.28.704	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x7 L5°
03.28.705	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x8	03.28.705	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x8 L5°
03.28.706	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x9	03.28.706	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x9 L5°
03.28.707	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x4	03.28.707	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x4 L5°
03.28.708	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x5	03.28.708	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x5 L5°

03.28.709	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x6	03.28.709	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x14x6 L5°
03.28.710	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x7	03.28.710	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x14x7 L5°
03.28.711	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x8	03.28.711	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x14x8 L5°
03.28.712	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x9	03.28.712	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x14x9 L5°
03.28.713	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x4	03.28.713	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x16x4 L5°
03.28.714	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x5	03.28.714	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x16x5 L5°
03.28.715	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x6	03.28.715	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x16x6 L5°
03.28.716	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x7	03.28.716	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x16x7 L5°
03.28.717	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x8	03.28.717	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x16x8 L5°
03.28.718	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x9	03.28.718	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x16x9 L5°
03.28.719	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x4	03.28.719	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x16x4 L5°
03.28.720	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x5	03.28.720	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x16x5 L5°
03.28.721	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x6	03.28.721	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x16x6 L5°
03.28.722	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x7	03.28.722	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x16x7 L5°
03.28.723	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x8	03.28.723	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x16x8 L5°
03.28.724	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x9	03.28.724	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x16x9 L5°
03.28.725	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x4	03.28.725	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x4 L5°
03.28.726	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x5	03.28.726	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x5 L5°

03.28.727	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x6	03.28.727	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x6 L5°
03.28.728	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x7	03.28.728	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x7 L5°
03.28.729	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x8	03.28.729	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x8 L5°
03.28.730	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x9	03.28.730	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x9 L5°
03.28.201	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x4 с Ti метками	03.28.201	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x4 L7°- Ti markers
03.28.202	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x5 с Ti метками	03.28.202	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x5 L7°- Ti markers
03.28.203	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x6 с Ti метками	03.28.203	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x6 L7°- Ti markers
03.28.204	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x7 с Ti метками	03.28.204	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x7 L7°- Ti markers
03.28.205	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x8 с Ti метками	03.28.205	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x8 L7°- Ti markers
03.28.206	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x9 с Ti метками	03.28.206	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x9 L7°- Ti markers
03.28.207	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x4 с Ti метками	03.28.207	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x4 L7°- Ti markers
03.28.208	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x5 с Ti метками	03.28.208	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x5 L7°- Ti markers
03.28.209	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x6 с Ti метками	03.28.209	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x6 L7°- Ti markers
03.28.210	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x7 с Ti метками	03.28.210	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x7 L7°- Ti markers
03.28.211	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x8 с Ti метками	03.28.211	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x8 L7°- Ti markers
03.28.212	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x9 с Ti метками	03.28.212	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x9 L7°- Ti markers
03.28.213	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x4 с Ti метками	03.28.213	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x16x4 L7°- Ti markers
03.28.214	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x5 с Ti метками	03.28.214	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x16x5 L7°- Ti markers
03.28.215	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x6 с Ti метками	03.28.215	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x16x6 L7°- Ti markers

03.28.216	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x7 с Ti метками
03.28.217	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x8 с Ti метками
03.28.218	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x9 с Ti метками
03.28.219	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x4 с Ti метками
03.28.220	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x5 с Ti метками
03.28.221	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x6 с Ti метками
03.28.222	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x7 с Ti метками
03.28.223	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x8 с Ti метками
03.28.224	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x9 с Ti метками
03.28.225	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x4 с Ti метками
03.28.226	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x5 с Ti метками
03.28.227	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x6 с Ti метками
03.28.228	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x7 с Ti метками
03.28.229	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x8 с Ti метками
03.28.230	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x9 с Ti метками
03.28.301	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x4с Ti метками
03.28.302	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x5с Ti метками
03.28.303	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x6с Ti метками
03.28.304	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x7с Ti метками

03.28.216	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x16x7 L7°- Ti markers
03.28.217	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x16x8 L7°- Ti markers
03.28.218	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x16x9 L7°- Ti markers
03.28.219	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x4 L7°- Ti markers
03.28.220	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x5 L7°- Ti markers
03.28.221	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x6 L7°- Ti markers
03.28.222	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x7 L7°- Ti markers
03.28.223	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x8 L7°- Ti markers
03.28.224	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x9 L7°- Ti markers
03.28.225	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x4 L7°- Ti markers
03.28.226	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x5 L7°- Ti markers
03.28.227	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x6 L7°- Ti markers
03.28.228	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x7 L7°- Ti markers
03.28.229	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x8 L7°- Ti markers
03.28.230	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x9 L7°- Ti markers
03.28.301	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x4 L5°- Ti markers
03.28.302	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x5 L5°- Ti markers
03.28.303	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x6 L5°- Ti markers
03.28.304	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x7 L5°- Ti markers

03.28.305	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x8с Ti метками	03.28.305	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x8 L5°- Ti markers
03.28.306	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x9с Ti метками	03.28.306	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x9 L5°- Ti markers
03.28.307	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x4с Ti метками	03.28.307	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x4 L5°- Ti markers
03.28.308	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x5с Ti метками	03.28.308	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x5 L5°- Ti markers
03.28.309	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x6с Ti метками	03.28.309	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x6 L5°- Ti markers
03.28.310	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x7с Ti метками	03.28.310	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x7 L5°- Ti markers
03.28.311	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x8с Ti метками	03.28.311	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x8 L5°- Ti markers
03.28.312	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x9с Ti метками	03.28.312	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x9 L5°- Ti markers
03.28.313	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x4с Ti метками	03.28.313	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers
03.28.314	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x5с Ti метками	03.28.314	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers
03.28.315	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x6с Ti метками	03.28.315	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x6 L5°- Ti markers
03.28.316	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x7с Ti метками	03.28.316	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers
03.28.317	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x8с Ti метками	03.28.317	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers
03.28.318	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x9с Ti метками	03.28.318	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers
03.28.319	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x4с Ti метками	03.28.319	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x4 L5°- Ti markers
03.28.320	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x5с Ti метками	03.28.320	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x5 L5°- Ti markers
03.28.321	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x6с Ti метками	03.28.321	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x6 L5°- Ti markers
03.28.322	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x7с Ti метками	03.28.322	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x7 L5°- Ti markers
03.28.323	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x8с Ti метками	03.28.323	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x8 L5°- Ti markers

03.28.324	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x9с Ti метками
03.28.325	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x4с Ti метками
03.28.326	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x5с Ti метками
03.28.327	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x6с Ti метками
03.28.328	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x7с Ti метками
03.28.329	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x8с Ti метками
03.28.330	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x9с Ti метками

Далее по тексту для медицинских изделий могут быть использованы следующие наименования: изделие, медицинское изделие, МИ, устройство, имплантат, имплантируемое устройство, протез, эндопротез, эндопротез спинальный, система, кейдж, винт, пластина, Mecta-C, а также комбинации вышеперечисленных названий (например, имплантаты Mecta-C).

Далее по тексту для изделий может применяться обозначение Система передних шейных пластин Mecta-C или Система для межпозвонкового соединения Mecta-C. Группы изделий, входящих в эти два обозначения указаны в пункте 1.1 Выписки из технического файла.

1.2. Классификация МИ

Медицинское изделие относится к классу риска 3.

Тип и длительность контакта с организмом человека – изделия постоянного контакта (более 30 суток) с мягкими и костными тканями.

Кратность применения медицинского изделия – изделие однократного применения.

Имплантируемое изделие.

Стерильность – медицинское изделие стерильное.

Применение для жизненно важных органов (сердце, центральная система кровообращения, центральная нервная система) – изделие не имеет контакт с жизненно важными органами.

2. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ И ПРИНЦИПЫ

03.28.324	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x16x9 L5°- Ti markers
03.28.325	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x4 L5°- Ti markers
03.28.326	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x5 L5°- Ti markers
03.28.327	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x6 L5°- Ti markers
03.28.328	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x7 L5°- Ti markers
03.28.329	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x8 L5°- Ti markers
03.28.330	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x9 L5°- Ti markers

The following names may be used for medical devices: product, medical device, MD, device, implant, implantable device, prosthesis, endoprosthesis, spinal endoprosthesis, system, cage, plate, screw, Mecta-C, and combinations of these names (e.g., Mecta-C implants).

The designation Mecta-C Anterior Cervical Plate System or Mecta-C Intervertebral Fusion Device System may be used hereinafter for the products. The product groups included in these two designations are listed in paragraph 1.1 of the Extract from the technical file.

1.2. MD classification

The medical device belongs to risk class 2b.

Type and duration of contact with the human body - products in constant contact (more than 30 days) with soft and bone tissues.

Frequency of medical product use - single-use product.

Implantable device.

Sterility - medical device is sterile.

Use for vital organs (heart, central circulatory system, central nervous system) - the product has no contact with vital organs.

2. INTENDED USE AND PRINCIPLE OF OPERATION

Система имплантатов Mecta-C для шейного отдела позвоночника предназначена для стабилизации положения и содействия спондилодезу (сращиванию) костных структур после хирургических вмешательств при травмах, дегенеративных заболеваниях, опухолях и деформациях шейного отдела позвоночника.

3. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

3.1. Показания

Система передних шейных пластин Mecta-C

Система пластин Mecta-C предназначена для фиксации передних межтеловых винтов / пластин от C2 до T1. Хирург должен хорошо понимать показания и противопоказания систем спинальной фиксации. Система показана для временной стабилизации переднего отдела позвоночника во время развития спондилодеза шейного отдела позвоночника у пациентов с:

- 1) остеохондрозом (определяется болью в шее дискогенного происхождения с дегенерацией диска, подтвержденной анамнезом и рентгенологическими исследованиями),
- 2) травмой (включая переломы),
- 3) опухоли,
- 4) деформацию (определяемую как кифоз, лордоз или сколиоз),
- 5) псевдоартроз
- 6) неудачное предыдущее сращение.

Эта система изделий предназначена только для переднего шейного межпозвонкового спондилодеза.

Система для межпозвонкового соединения Mecta-C

Система для межпозвонкового соединения Mecta-C показана для проведения процедур переднего межтелового шейного сращения у скелетно зрелых пациентов. Система предназначена для использования с аутогенным костным трансплантатом для облегчения сращения. На одно межпозвонковое пространство можно использовать одно устройство. Имплантаты предназначены для использования с дополнительной фиксацией позвоночника.

Кейджи Mecta-C предназначены для использования от первого до

The Mecta-C cervical spine implant system is designed to stabilize the position and promote spondylodesis (fusion) of bone structures after surgical interventions for injuries, degenerative diseases, tumors and deformities of the cervical spine.

3. INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS FOR MD USE AND POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

3.1. Indications

The Mecta-C Anterior Cervical Plate System

The Mecta-C plate system is intended for anterior Interbody screw/plate fixation from C2 to T1. The indications and contraindications of spinal instrumentation systems should be well understood by the surgeon. The system is indicated for use in the temporary stabilization of the anterior spine during the development of cervical spine fusion in patients with:

- 1) degenerative disc disease (as defined by neck pain of discogenic origin with degeneration of the disc confirmed by history and radiographic studies),
- 2) trauma (including fractures),
- 3) tumors,
- 4) deformity (defined as kyphosis, lordosis, or scoliosis),
- 5) pseudarthrosis,
- 6) failed previous fusion.

This device system is intended for anterior cervical intervertebral body fusions only.

The Mecta-C Intervertebral Fusion Device System

The Mecta-C/Mecta-C TiPEEK intervertebral body fusion device is indicated for anterior cervical interbody fusion procedures in skeletally mature patients. The device systems are designed for use with autogenous bone graft to facilitate fusion. One device may be used per intervertebral space. The implants are intended to be used with supplemental spinal fixation.

The Mecta-C / Mecta-C TiPEEK device is intended for use at one to three levels in the cervical spine, from C2-C3 to C7-T1, for the treatment of cervical disc disease (defined as neck pain of discogenic origin with

третьего уровня в шейном отделе позвоночника, от C2-C3 до C7-T1, для лечения заболевания шейных дисков (определяется как боль в шее дискогенного происхождения с дегенерацией диска, подтвержденная историей и рентгенографическими исследованиями). Данное медицинское изделие должно использоваться у пациентов, которые прошли шестинедельный курс безоперационного лечения.

3.2. Противопоказания

Система передних шейных пластин Mecta-C

Данное устройство не одобрено для винтового крепления к задним элементам (ножкам) шейного, грудного или поясничного отдела позвоночника. Противопоказания включают, но не ограничиваются ими:

- Инфекция, локальная в месте проведения операции.
- Признаки местного воспаления.
- Лихорадка или лейкоцитоз.
- Морбидное ожирение.
- Беременность.
- Психическое заболевание.
- Медицинское или хирургическое состояние, которое исключает потенциальную пользу от операции по имплантации позвоночника, например повышение скорости оседания, не объясняемое другими заболеваниями, повышение уровня лейкоцитов или выраженный сдвиг влево в дифференциальном анализе лейкоцитов.
- Быстрое развитие заболеваний суставов, рассасывание костной ткани, остеопения и/или остеопороз. Остеопороз является относительным противопоказанием, поскольку это состояние может ограничить степень достигаемой коррекции, объем механической фиксации и/или качество костного трансплантата.
- Предполагаемая или документально подтвержденная аллергия или непереносимость металла.
- Возможные воспалительные и аллергические реакции: Признаки местного воспаления; лихорадка или лейкоцитоз; чувствительность к металлу/полимеру/аллергия на материал имплантата; грубо искаженная анатомия вследствие врожденные аномалии; остеопения и/или остеопороз; неподходящая или недостаточная костная опора, костная незрелость- Не требующий костного трансплантата и сращения, или когда не требуется заживление перелома.

- Соединение металлов из разных компонент

degeneration of the disc confirmed by history and radiographic studies). The cervical device is to be used in patients who have had six weeks of non-operative treatment.

3.2.Contraindications

The Mecta-C Anterior Cervical Plate System

This device is not approved for screw attachment to the posterior elements (pedicles) of the cervical, thoracic, or lumbar spine. Contraindications include, but are not limited to:

- Infection, local to the operative site.
- Signs of local inflammation.
- Fever or leukocytosis.
- Morbid obesity.
- Pregnancy.
- Mental illness.
- Medical or surgical condition which would preclude the potential benefit of spinal implant surgery, such as the elevation of sedimentation rate unexplained by other diseases, elevation of white blood count (WBC), or a marked left shift in the WBC differential count.
- Rapid joint disease, bone absorption, osteopenia, and/or osteoporosis. Osteoporosis is a relative contraindication since this condition may limit the degree of obtainable correction, the amount of mechanical fixation, and/or the quality of the bone graft.
- Suspected or documented metal allergy or intolerance.
- Possible inflammatory and allergic reactions: Signs of local inflammation; fever or leukocytosis; Metal/ polymer sensitivity/allergies to the implant material; Grossly distorted anatomy due to congenital abnormalities; osteopenia and/or osteoporosis; unsuitable or insufficient bone support, bone immaturity.
- Any case not needing a bone graft and fusion or where fracture healing is not required.
- Requiring the mixing of metals from different components.
- Patient having inadequate tissue coverage over the operative site or

- Пациент с неадекватным тканевым покрытием операционного участка или с недостаточным запасом костной ткани, качество кости или анатомическое определение. - Не описанный в разделе "Показания". - Пациент, не желающий соблюдать послеоперационные инструкции. - Время, когда использование имплантата может нарушить анатомические структуры или ожидаемые физиологические характеристики. Система для межпозвонкового соединения Mecta-C Систему устройств для межпозвонкового соединения Mecta-C не следует имплантировать пациентам с активной системной инфекцией или инфекцией, локализованной в месте имплантации.	where t ; is inadequate bone stock, bone quality, or anatomical definition. - Not described in the Indications. - Patient unwilling to cooperate with the post-operative instructions. - Time implant utilization would interfere with anatomical structures or expected physiological performance. The Mecta-C Intervertebral Fusion Device System The Mecta-C Intervertebral Fusion Device System should not be implanted in patients with active systemic infection or infection localized to the site of implantation.
3.3. Побочные эффекты Система передних шейных пластин Mecta-C Неблагоприятные эффекты могут возникать при использовании имплантата как с сопутствующими инструментами, так и без них. Потенциальные неблагоприятные события включают, но не ограничиваются ими: - Раннее или позднее ослабление любого или всех компонентов. - Разборка, изгиб и/или поломка любого или всех компонентов. - Реакция инородного тела (аллергическая) на имплантаты, обломки, продукты коррозии, трансплантационный материал, включая металлоз, окрашивание, образование опухолей и/или аутоиммунные заболевания. - Возможные воспалительные и аллергические реакции: Признаки местного воспаления; лихорадка или лейкоцитоз; чувствительность к металлу/полимеру/аллергия на материал имплантата; грубо искаженная анатомия вследствие врожденные аномалии; остеопения и/или остеопороз; неподходящая или недостаточная костная опора, костная незрелость. - Давление на кожу составных частей у пациентов с недостаточным покрытием тканей над имплантатом, возможно вызывая проникновение в кожу, раздражение и/или боль. Бурсит. Повреждение тканей, вызванное неправильным позиционированием и установкой имплантатов или инструментов.	3.3 Adverse effects The Mecta-C Anterior Cervical Plate System Adverse effects may occur when the implant is used either with or without associated instrumentation. Potential adverse events include, but are not limited to: - Early or late loosening of any or all of the components. - Disassembly, bending, and/or breakage of any or all of the components. - Foreign body (allergic) reaction to implants, debris, corrosion products, graft material, including metallosis, staining, tumor formation, and/or auto-immune disease. - Possible inflammatory and allergic reactions: Signs of local inflammation: Signs of local inflammation; fever or leukocytosis; Metal/polymer sensitivity/allergies to the implant material; Grossly distorted anatomy due to congenital abnormalities; osteopenia and/or osteoporosis; unsuitable or insufficient bone support, bone immaturity. - Pressure on the skin from component parts in patients with inadequate tissue coverage over the implant possibly causing skin penetration, irritation, and/or pain. Bursitis. Tissue damage caused by improper positioning and placement of implants or instruments. - Post-operative change in spinal curvature, loss of correction, height, and/or reduction. - Infection. - Dural tears.

- Послеоперационное изменение кривизны позвоночника, потеря коррекции, высоты и/или уменьшение.
- Инфекция.
- Дуральные разрывы.
- Потеря неврологической функции, включая паралич (полный или неполный), дизестезию, гиперестезию, анестезия, парестезия, возникновение радикулопатии, и/или развитие или продолжение боли, онемения, невромы или ощущения покалывания.
- Невропатия, неврологические нарушения (преходящие или постоянные), двусторонняя параплегия, нарушения рефлексов и/или арахноидит.
- Потеря контроля над кишечником и/или мочевым пузырем или другие виды нарушений урологической системы.
- Образование рубцов, возможно, вызывающих неврологический компромисс вокруг нервов и/или боль.
- Перелом, микроперелом, рассасывание, повреждение или проникновение в любую кость позвоночника и/или костный трансплантат или костный трансплантат на уровне, выше и/или ниже уровня операции.
- Помехи при проведении рентгенографии, КТ и/или МРТ из-за наличия имплантатов.
- Не срастание (или псевдоартроз). Отсроченное сращение. Неполное сращение.
- Прекращение любого потенциального роста оперированной части позвоночника. Потеря подвижности или функции позвоночника. Неспособность выполнять повседневные действия.
- Потеря костной ткани или снижение плотности кости, возможно, вызванное защитой от стресса.
- Осложнения со стороны донорского участка трансплантата, включая боль, переломы или проблемы с заживлением ран.
- Ателектаз, илеус, гастрит, грыжа пульпозного ядра, ретропульпированный трансплантат.
- Кровотечение, гематома, серома, эмболия, отек, инсульт, чрезмерное кровотечение, флебит, некроз раны, дегисценция раны или повреждение раны.
- дегисценция или повреждение кровеносных сосудов.
- Нарушение работы желудочно-кишечного тракта и/или репродуктивной системы, включая стерильность и потерю консорциума.
- Развитие респираторных проблем, например, легочной эмболии,

- Loss of neurological function, including paralysis (complete or incomplete), dysesthesias, hyperesthesia, anesthesia, paraesthesia, appearance of radiculopathy, and/or the development or continuation of pain, numbness, neuroma, or tingling sensation.
- Neuropathy, neurological deficits (transient or permanent), bilateral paraplegia, reflex deficits, and/or arachnoiditis.
- Loss of bowel and/or bladder control or other types of urological system compromise.
- Scar formation possibly causing neurological compromise around nerves and/or pain.
- Fracture, microfracture, resorption, damage, or penetration of any spinal bone and/or bone graft or bone graft harvest site at, above, and/or below the level of surgery.
- Interference with roentgenographic, CT, and/or MR imaging because of the presence of the implants.
- Non-union (or pseudarthrosis). Delayed union. Mal-union.
- Cessation of any potential growth of the operated portion of the spine. Loss of spinal mobility or function. Inability to perform the activities of daily living.
- Bone loss or decrease in bone density, possibly caused by stress shielding.
- Graft donor site complications including pain, fracture, or wound healing problems.
- Atelectasis, ileus, gastritis, herniated nucleus pulposus, retropulsed graft.
- Hemorrhage, hematoma, seroma, embolism, edema, stroke, excessive bleeding, phlebitis, wound necrosis, wound dehiscence, or damage to blood vessels.
- Gastrointestinal and/or reproductive system compromise, including sterility and loss of consortium.
- Development of respiratory problems, e.g. pulmonary embolism, bronchitis, pneumonia, etc.
- Change in mental status.
- Death.

The Mecta-C Intervertebral Fusion Device System

- Изменение психического статуса.
- Смерть.

Система устройств для межпозвонкового соединения Mesta-C

Неблагоприятные эффекты могут возникать при использовании имплантата как с сопутствующими инструментами, так и без них. Потенциальный риск неблагоприятных эффектов в результате смещения и нестабилизации может увеличиться в случаях, когда не используется сопутствующая дополнительная поддержка. Потенциальные неблагоприятные явления включают, но не ограничиваются ими:

- Миграция имплантата.
- Поломка имплантата.
- Реакция инородного тела на имплантаты, включая возможное образование опухолей, аутоиммунные заболевания и/или рубцевание.
- Давление на окружающие ткани или органы.
- Потеря правильного искривления позвоночника, коррекции, высоты и/или уменьшения.
- Инфекция.
- Перелом кости или стрессовая защита на уровне, выше или ниже уровня операции.
- Несращение (или псевдоартроз).
- Потеря неврологической функции, появление радикулопатии, развитие боли. Нейроваскулярный компромисс включая паралич, утечку спинномозговой жидкости.
- Кровоизлияние в кровеносные сосуды и/или гематомы.
- Дисцит, арахноидит и/или другие виды воспаления.
- Тромбоз глубоких вен, тромбофлебит и/или эмболия легочной артерии.
- Осложнение донорского участка костного трансплантата.
- Дуральный разрыв, требующий хирургического вмешательства. Этот риск связан с хирургической процедурой. Использование устройства по назначению не требует его близкого расположения к твердой мозговой оболочке.
- Трахео-эзофагеальные повреждения.
- Дегенерация смежных уровней.
- Повреждения мягких тканей.
- Дисфагия.
- Неспособность возобновить обычную повседневную деятельность.
- Раннее или позднее расплывание или смещение имплантата.

Adverse effect may occur when the implant is used either with or without associated instrumentation. The potential risk of adverse effects as a result of movement and non-stabilization may increase in cases where associated complementary support is not employed. Potential adverse events include but are not limited to:

- Implant migration.
- Breakage of the implant.
- Foreign body reaction to the implants including possible tumour formation, auto immune disease and / or scarring.
- Pressure on the surrounding tissues or organs.
- Loss of proper spinal curvature, correction, height and / or reduction.
- Infection.
- Bone fracture or stress shielding at, above or below the level of surgery.
- Non-union (or pseudarthrosis).
- Loss of neurological function, appearance of radiculopathy, development of pain. Neurovascular compromise including paralysis, Cerebral spinal fluid leakage.
- Haemorrhage of blood vessels and / or haematomas.
- Discitis, arachnoiditis and / or other types of inflammation.
- Deep venous thrombosis, thrombophlebitis and / or pulmonary embolus.
- Bone graft donor site complication.
- Dural tear requiring surgical repair. This risk is related to the surgical procedure. The intended use of the device does not require it to be close to the dura.
- Tracheo-esophageal injuries.
- Adjacent level degeneration.
- Soft tissue injuries.
- Disphagia.
- Inability to resume activities of normal daily living.
- Early or late loosening or movement of the implant.
- Scar formation possibly causing neurological compromise or compression around nerves and / or pain.
- Fracture, microfracture, resorption, damage or penetration of any spinal bone (including pedicles and / or vertebral body) and / or bone graft or bone graft harvest site at, above and / or below the level of surgery.

- Образование рубцов, возможно, вызывающих неврологический компромисс или сдавливание нервов и/или боль. - Перелом, микроперелом, рассасывание, повреждение или проникновение в любую кость позвоночника (включая ножки и / или тела позвонков) и/или костного трансплантата или места сбора костного трансплантата на уровне, выше и/или ниже уровня операции. - Грыжа пульпозного ядра, нарушение целостности диска или дегенерация на уровне, выше или ниже уровня операции. - Потеря или снижение подвижности или функции позвоночника. - Развитие проблем с дыханием, например, эмболия легочной артерии, ателектаз, бронхит, пневмония и т.д. - Изменение психического статуса. - Смерть. Неблагоприятные события могут потребовать повторной операции или ревизии. Ревизия - это процедура, которая корректирует или каким-либо образом изменяет первоначальную конфигурацию имплантата, например, корректировка положения первоначальной конфигурации или удаление имплантатов с их последующей заменой. Удаление - это процедура, в ходе которой удаляется один или несколько имплантатов с оригинальной конфигурации устройства без какой-либо замены. Повторная операция - это процедура, которая включает в себя любое хирургическое вмешательство на задействованном уровне (уровнях) позвоночника, при котором не удаляются, не изменяются и не добавляются имплантаты.	- Herniated nucleus pulposus, disc disruption or degeneration at, above or below the level of surgery. - Loss of or decrease in spinal mobility or function. - Development of respiratory problems, e.g. pulmonary embolism, atelectasis, bronchitis, pneumonia etc. - Change in mental status. - Death. Adverse events may necessitate re-operation or revision. A revision is a procedure which adjusts or in any way modifies the original implant configuration, eg adjusting the position of the original configuration or removal of implants with their subsequent replacement. A removal is a procedure which removes one or more implants of the original device configuration without any replacement. A reoperation is a procedure which involves any surgical procedure at the involved spinal level(s) which does not remove, modify or add any implants.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ МИ И УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 4.1. Потенциальные потребители МИ МИ предназначены для использования квалифицированными специалистами в области здравоохранения. Специалисты здравоохранения должны иметь полное представление о предполагаемом использовании продукта и используемых хирургических методах, а также пройти соответствующую подготовку. Изделия могут назначаться и имплантироваться только медицинскими работниками, имеющими законное разрешение на проведение такого рода операций. Медицинские работники: хирург-ортопед, хирург-травматолог 4.2. Указания по использованию	4. INFORMATION ON POTENTIAL USERS OF MD AND DIRECTIONS FOR USE 4.1. Potential users of MD The products are intended for use by qualified personnel. Health care professionals must have a thorough understanding of the intended use of the product and the surgical techniques used, and must be qualified through appropriate training. The products can be prescribed and implanted only by a health care professional legally authorized to perform this type of surgery. Medical professionals: orthopedic surgeon, trauma surgeon 4.2. Directions for use

Система для межпозвонкового соединения Mecta-C

Выбор имплантата

- Выбор правильного размера, формы и дизайна имплантата для каждого пациента имеет решающее значение для успеха процедуры. Хирургические имплантаты подвергаются многократным нагрузкам при использовании, и их прочность ограничена необходимостью адаптации конструкции к анатомии человека. Если при выборе пациента, установке имплантата и послеоперационном ведении не уделяется большое внимание выбору пациента, установки имплантата и послеоперационного ведения, чтобы минимизировать нагрузки на имплантат, такие нагрузки могут привести к усталости материала и последующему разрушению. Усталость материала и последующее разрушение имплантата до завершения процесса сращения, что может привести к дальнейшей травме или необходимости преждевременного удаления имплантата.

- Чрезмерные нагрузки, такие как чрезмерный крутящий момент, растягивающая или сжимающая нагрузка, приложенная к инструментам для введения имплантата с длинной ручкой прикрепленные к имплантату, или прямое приложение нагрузки к небольшому участку устройства могут повредить интерфейс имплантат/инструмент. Сломанные имплантаты должны быть удалены и/или заменены.

- Неправильный выбор, установка, позиционирование и фиксация этих устройств могут привести к необычным стрессовым условиям сокращая срок службы имплантата.

- Хирург должен быть тщательно ознакомлен с хирургической процедурой, инструментами и характеристиками имплантата перед проведением операции. Рекомендуется периодическое наблюдение для контроля за положением и состоянием имплантатов, а также состояния прилегающей кости.

Фиксация имплантата

Установка и позиционная регулировка имплантатов должна производиться только с помощью специальных вспомогательных инструментов и оборудования, поставляемых и назначаемых компанией Medacta. Поэтому в интересах безопасности пациента рекомендуется не использовать имплантаты Medacta с имплантатами из других источников.

The Mecta-C Intervertebral Fusion Device System

Implant selection

- The selection of the proper size, shape and design of the implant for each patient is crucial to the success of the procedure. Surgical implants are subject to repeated stresses in use and their strength is limited by the need to adapt the design to the human anatomy. Unless great care is taken in patient selection, placement of the implant and postoperative management to minimize stresses on the implant, such stresses may cause material fatigue and consequent breakage of the implant before the fusion process is complete, which may result in further injury or the need to remove the implant prematurely.

- Excessive loads, such as excessive torque, tensile or compression load applied to long handle insertion tools attached to the implant or direct application of loads to a small area of the devices can damage the implant/instrument interface. Fractured implants should be removed and/or replaced.

- Improper selection, placement, positioning and fixation of these devices may result in unusual stress conditions reducing the service life of the implant.

- The surgeon is to be thoroughly familiar with the surgical procedure, instruments and implant characteristics prior to performing surgery. Periodic follow-up is recommended to monitor the position and state of the implants, as well as the condition of the adjoining bone.

Implant fixation

Installation and positional adjustment of implants must only be done with special ancillary instruments and equipment supplied and designated by Medacta. In the interests of patient safety, it is therefore recommended that Medacta implants are not used with implants from any other source.

Preoperative

The surgeon and operating theatre personnel should wear sterile surgical gloves. Under no circumstances should

Предоперационный период

Хирург и персонал операционной должны носить стерильные хирургические перчатки. Компоненты не должны соприкасаться с твердыми предметами (если иное не указано в хирургической технике). Перед использованием каждый компонент должен быть визуально проверен на наличие дефектов. Специальные хирургические инструменты необходимы для операции. Чтобы не повредить имплантаты и инструменты, с ними должны обращаться с особой осторожностью квалифицированным персоналом и в условиях, где контролируются гигиенические условия. Правильное использование инструментов описано в методике проведения операции. Перед операцией инструменты должны быть осмотрены визуально.

Деформированные или поврежденные инструменты могут привести к неправильному расположению имплантата или его поломке.

- Следует отбирать только тех пациентов, которые соответствуют критериям, описанным в показаниях.
- Состояния и/или предрасположенности пациентов, указанные в вышеупомянутых противопоказаниях, следует избегать.
- Необходимо соблюдать осторожность при обращении и хранении имплантата(ов). Они не должны быть поцарапаны или повреждены.
- Дополнительная информация об этой системе будет предоставлена по запросу.
- Хирург должен быть знаком с различными имплантатами перед их использованием и должен лично убедиться, что все имплантаты имеются до начала операции.
- Размер имплантата(ов) для данного случая должен быть определен до начала операции. Во время операции должен быть достаточный запас имплантатов, включая размеры больше и меньше, чем которые предполагается использовать.
- Дополнительные стерильные имплантаты должны быть в наличии на случай непредвиденной необходимости.

Во время операции

- Необходимо тщательно соблюдать инструкции по технике проведения операции с системой устройств для межпозвоночного соединения Mecta-

the components come into contact with hard objects (unless otherwise specified in the surgical technique). Before use, each component must be visually inspected for imperfections. Special surgical instruments are required for the surgery. To avoid damaging the implants and the instruments, these should be handled with the utmost care by qualified personnel and in an environment where conditions of hygiene are controlled. The correct usage of instruments is described in the surgical technique. Instruments must be inspected visually before the operation.

Distorted or damaged instruments may result in malposition of the implant or implant failure.

- Only patients that meet the criteria described in the indications should be selected.
- Patient conditions and / or predispositions such as those addressed in the aforementioned contraindications should be avoided.
- Care should be taken in the handling and storage of the implant(s). They should not be scratched or damaged.
- Further information about this system will be provided upon request.
- The surgeon should be familiar with the various implants before use and should personally verify that all implants are present before the surgery begins.
- The size of the implant(s) for the case should be determined prior to beginning the surgery. An adequate inventory of implant sizes should be available at the time of surgery, including sizes larger and smaller than those expected to be used.
- Additional sterile implants should be available in case of any unexpected need.

Intraoperative

- The instructions in the Mecta-C Intervertebral Fusion Device System surgical technique should be carefully followed.
- At all times, extreme caution should be used around the spinal cord and nerve roots. Damage to the nerves will cause loss of neurological functions.
- Breakage, slippage or misuse of instruments or implants may cause injury to the patient or operative personnel.

С. - Вокруг спинного мозга и нервных корешков всегда следует соблюдать особую осторожность. Повреждение нервов приведет к потере неврологических функций. - Поломка, соскальзывание или неправильное использование инструментов или имплантатов может привести к травме пациента или операционного персонала. - На поверхности имплантата не должно быть царапин или насечек, поскольку такие действия могут снизить функциональную прочность имплантата. - Для обеспечения надлежащего сращения ниже и вокруг места сращения следует использовать аутогенный костный трансплантат или аутологичный костный трансплантат. В случае ограниченной доступности аутогенный костный трансплантат может быть смешан с синтетическим костным заменителем костного трансплантата. - Не следует использовать костный цемент (ПММА), так как этот материал может затруднить удаление этих имплантатов или невозможным. Тепло, выделяемое в процессе полимеризации, может повредить или деформировать имплантаты из ПЭЭК. - Использовать систему визуализации для облегчения хирургического вмешательства.	- The implant surface should not be scratched or notched since such actions may reduce the functional strength of the implant. - To ensure proper fusion below and around the location of the fusion, autogenous bone graft or autologous bone graft should be used. In case of limited availability autogenous bone graft can be mixed with synthetic bone graft substitute. - Bone cement (PMMA) should not be used, because the material may make removal of these implants difficult or impossible. The heat generated from the curing process may damage or deform the PEEK implants. - Utilize an imaging system to facilitate surgery.
Удаление диска и подготовка концевой пластины Для эффективной визуализации и удаления диска, проводите distraction штитом Каспара или эквивалентным дистрактором. Этот шаг также позволяет восстановить сегментарный лордоз, если это необходимо. Перед distraction сегмента межпозвоночный диск должен быть разрезан и частично удален с помощью кюреток и гипофизарных ронжеров. После distraction производится полное удаление материала межпозвоночного диска и хрящевых концевых пластин для обнажения костной концевой пластины. Рашпиль Mecta-C имеет механический упор для ограничения глубины введения.	Disc removal and Preparation of the endplate For effective visualization and removal of the disc, Caspar Pin distraction, or an equivalent distractor system, is recommended. This step also allows for restoration of segmental lordosis, if desired. Before distraction of the segment, the intervertebral disc should be incised and partially removed with curettes and pituitary rongeurs. Following distraction, complete removal of intervertebral disc material and cartilaginous endplates is then performed to expose the underlying bony endplate. The Mecta-C rasp offers a mechanical stop to limit the insertion depth.
Установка имплантата Подготовьте аутогенный костный трансплантат для установки в изделие. Аккуратно упакуйте костный трансплантат в отверстие выбранных кейджей с помощью блока наполнителя и костного тампона.	Implant placement Prepare autogenous bone graft for insertion into the device. Gently pack bone graft into the opening of the selected cages using the Filler block and bone tamp.



Рис.10 Упаковка костного трансплантата / Fig. 10 Bone graft pack

Убедитесь, что палец инструмента для введения находится в разблокированном положении, установите имплантат в инструмент для введения. Поверните колесико на 90°, чтобы прочно зафиксировать имплантат в инструменте для введения. Символ замка на колесике пальца должен теперь совпадать с меткой на рукоятке.

ВНИМАНИЕ

Кейдж куполовидный имеет кривизну только на краниальной поверхности, в то время как плоские кейджи симметричны. Стрелка на передней стороне куполовидного кейджа указывает краниальное направление. Убедитесь, что имплантат правильно выровнен и стрелка направлена вверх.

Вставьте имплантат прямо в межпозвоночный диск мягким надавливанием. Упор на дистальном конце инструмента для введения Mecta-C гарантирует, что имплантат не введен слишком далеко в межпозвоночное пространство. Имплантат должен быть введен на 1 мм за переднюю границу тел позвонков и центрально в передне-заднем направлении.

Ensure that the inserter thumb wheel is in the unlocked position. attach the implant to the inserter. turn the thumb wheel 90° to fix the implant firmly to the inserter. the lock symbol on the thumb wheel should now be aligned with the mark on the handle.

NOTICE

The dome shaped implant has a curvature only on the cranial surface whereas the flat implants are symmetrical. The arrow on the anterior aspect of the dome shaped implant indicates the cranial direction. ensure that the implant is correctly aligned with the arrow pointing upwards.

Insert the implant straight into the intervertebral disc space by gentle impaction. the stop at the distal end of the Mecta-C inserter ensures that the implant is not inserted too far into the intervertebral space. The implant should be inserted 1 mm beyond the anterior border of the vertebral bodies and centrally in the antero-posterior direction.

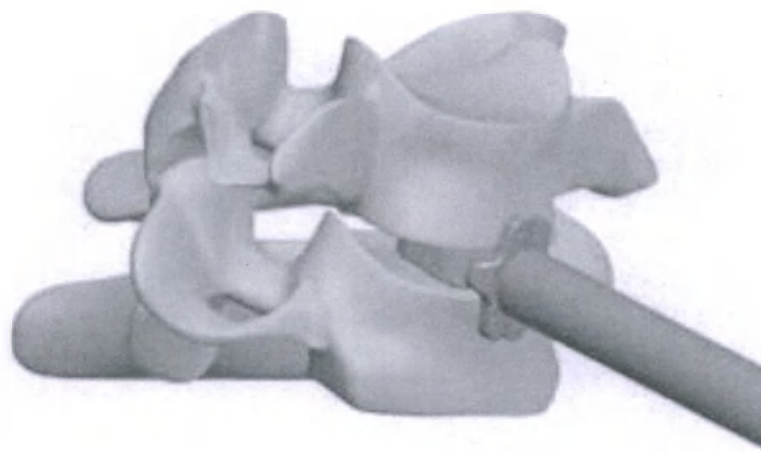


Рис.11 Введение имплантата / Fig.11 Implant insert

Расслабление штифтовой дистракции по Каспару реактивирует связочный аппарат, что должно привести к небольшой компрессии имплантата Mecta-C внутри межпозвоночного диска. Убедитесь, что у вас есть надежная фиксации имплантата Mecta-C после освобождения от штифта. Если имплантат Mecta-C может быть слегка смещен в дисковом пространстве, существует риск миграции и имплантат следует заменить на следующий большего размера.

Проверьте положение имплантата с помощью усилителя изображения.

Послеоперационный период

Послеоперационные указания и предупреждения врача для пациента, а также соблюдение пациентом соответствующих требований чрезвычайно важны.

- Пациенту должны быть даны подробные инструкции по использованию и ограничениям имплантата. Пациент должен быть предупрежден, что расшатывание и/или поломка имплантата(ов) являются осложнениями, которые могут возникнуть в результате ранней или чрезмерной нагрузки, механических вибраций, мышечной активности или внезапных толчков, или ударов по позвоночнику.

- Пациенту следует посоветовать не курить табак и не использовать никотиновую продукцию, не употреблять алкоголь, нестероидные или

Relaxing the Caspar Pin distraction reactivates the ligament apparatus which should produces a slight compression of the Mecta-C implant within the intervertebral disc space. ensure that you have secure fit of the Mecta-C implant after release of the Caspar Pin distraction. If the Mecta-C implant can be moved slightly in the disc space, there is a risk of migration and the implant should be replaced with the next larger size.

Check the position of the implant with the image intensifier.

Postoperative

The physician's postoperative directions and warnings to the patient and the corresponding patient compliance are extremely important.

- Detailed instructions on the use and limitations of the implant should be given to the patient. The patient must be warned that loosening and / or breakage of the implant(s) are complications which may occur as a result of early or excessive weight-bearing, mechanical vibrations, muscular activity or sudden jolts or shock to the spine.

- The patient should be advised not to smoke tobacco or utilize nicotine products, or to consume alcohol or nonsteroidals or anti-inflammatory medications such as aspirin during the bone graft healing process.

противовоспалительные препараты, такие как аспирин, во время процесса заживления костного трансплантата.

- Пациент должен быть предупрежден о невозможности сгибания в месте сращения позвонков и обучен тому, как компенсировать это постоянное физическое ограничение подвижности тела.

- Важно, чтобы иммобилизация соединения была установлена и подтверждена рентгенографическим исследованием. Если развивается не сращение или имплантаты расшатываются, мигрируют и/или ломаются, имплантат должен быть пересмотрен и/или удален немедленно, пока не возникла серьезная травма.

- Имплантаты Mecta-C - это межпозвоночные фиксирующие устройства, предназначенные для стабилизации операционной области во время процесса заживления/сращения.

- Любые извлеченные имплантаты должны быть обработаны таким образом, чтобы их повторное использование в другой хирургической процедуре было невозможным.

- The patient should be advised of the inability to bend at the point of spinal fusion and be taught to compensate for this permanent physical restriction in body motion.

- It is important that the immobilization of the union is established and confirmed by radiographic examination. If a non-union develops or if the implants loosen, migrate and / or break, the implant should be revised and / or removed immediately before serious injury occurs.

- Mecta-C implants are intervertebral fixation devices intended to stabilize the operative area during the healing/fusion process.

- Any retrieved implants should be treated in such a manner that re-use in another surgical procedure is not possible.

Система передних шейных пластин Mecta-C

Выбор имплантата

- Выбор правильного размера, формы и дизайна имплантата для каждого пациента имеет решающее значение для успеха процедуры. Хирургические имплантаты подвергаются многократным нагрузкам при использовании, и их прочность ограничена необходимостью адаптации конструкции к анатомии человека. Если при выборе пациента, установке имплантата и послеоперационном ведении не уделяется большое внимание выбору пациента, установки имплантата и послеоперационного ведения, чтобы минимизировать нагрузки на имплантат, такие нагрузки могут привести к усталости материала и последующему разрушению. усталость материала и последующее разрушение имплантата до завершения процесса сращения, что может привести к дальнейшей травме или необходимости преждевременного удаления имплантата.

- Чрезмерные нагрузки, такие как чрезмерный крутящий момент, растягивающая или сжимающая нагрузка, приложенная к инструментам для введения имплантата с длинной ручкой прикрепленные к имплантату, или прямое приложение нагрузки к небольшому участку устройства могут повредить интерфейс имплантат/инструмент. Сломанные имплантаты должны быть удалены и/или заменены.

The Mecta-C Anterior Cervical Plate System

Implant selection

- The selection of the proper size, shape and design of the implant for each patient is crucial to the success of the procedure. Surgical implants are subject to repeated stresses in use and their strength is limited by the need to adapt the design to the human anatomy. Unless great care is taken in patient selection, placement of the implant and postoperative management to minimize stresses on the implant, such stresses may cause material fatigue and consequent breakage of the implant before the fusion process is complete, which may result in further injury or the need to remove the implant prematurely.

- Excessive loads, such as excessive torque, tensile or compression load applied to long handle insertion tools attached to the implant or direct application of loads to a small area of the devices can damage the implant/instrument interface. Fractured implants should be removed and/or replaced.

- Improper selection, placement, positioning and fixation of these devices may result in unusual stress conditions reducing the service life of the implant.

- The surgeon is to be thoroughly familiar with the surgical procedure, instruments ; implant characteristics prior to performing surgery.

- Неправильный выбор, установка, позиция и фиксация этих устройств могут привести к необычным стрессовым условиям сокращая срок службы имплантата.

- Хирург должен быть тщательно ознакомлен с хирургической процедурой, инструментами и характеристиками имплантата перед проведением операции. Рекомендуется периодическое наблюдение для контроля за положением и состоянием имплантатов, а также состояния прилегающей кости.

Фиксация имплантата

Установка и позиционная регулировка имплантатов должна производиться только с помощью специальных вспомогательных инструментов и оборудования, поставляемых и назначаемых компанией Medacta. Поэтому в интересах безопасности пациента рекомендуется не использовать имплантаты Medacta с имплантатами из других источников.

Предоперационный период

Хирург и персонал операционной должны носить стерильные хирургические перчатки. Компоненты не должны соприкасаться с твердыми предметами (если иное не указано в хирургической технике). Перед использованием каждый компонент должен быть визуально проверен на наличие дефектов. Специальные хирургические инструменты необходимы для операции. Чтобы не повредить имплантаты и инструменты, с ними должны обращаться с особой осторожностью квалифицированным персоналом и в условиях, где контролируются гигиенические условия. Правильное использование инструментов описано в методике проведения операции. Перед операцией инструменты должны быть осмотрены визуально.

Деформированные или поврежденные инструменты могут привести к неправильному расположению имплантата или его поломке.

- Следует отбирать только тех пациентов, которые соответствуют критериям, описанным в показаниях.

- Состояния и/или предрасположенности пациентов, указанные в вышеупомянутых противопоказаниях, следует избегать.

- Необходимо соблюдать осторожность при обращении и хранении имплантата(ов). Они не должны быть поцарапаны или повреждены.

Periodic follow up is recommended to monitor the position and state of the implants, as well as the condition of the adjoining bone.

Implant fixation

Installation and positional adjustment of implants must only be done with special ancillary instruments and equipment supplied and designated by Medacta. In the interests of patient safety, it is therefore recommended that Medacta implants are not used with implants from any other source.

Preoperative

The surgeon and operating theatre personnel should wear sterile surgical gloves. Under no circumstances should the components come into contact with hard objects (unless otherwise specified in the surgical technique). Before use, each component must be visually inspected for imperfections. Special surgical instruments are required for the surgery. To avoid damaging the implants and the instruments, these should be handled with the utmost care by qualified personnel and in an environment where conditions of hygiene are controlled. The correct usage of instruments is described in the surgical technique. Instruments must be inspected visually before the operation.

Distorted or damaged instruments may result in malposition of the implant or implant failure.

- Only patients that meet the criteria described in the indications should be selected.

- Patient conditions and / or predispositions such as those addressed in the aforementioned contraindications should be avoided.

- Care should be taken in the handling and storage of the implant(s). They should not be scratched or damaged.

- Further information about this system will be provided upon request.

- The surgeon should be familiar with the various implants before use and should personally verify that all implants are present before the surgery begins.

- The size of the implant(s) for the case should be determined prior to beginning the surgery. An adequate inventory of implant sizes should be available at the time of surgery, including sizes larger and smaller than those expected to be used.

- Дополнительная информация об этой системе будет предоставлена по запросу.
- Хирург должен быть знаком с различными имплантатами перед их использованием и должен лично убедиться, что все имплантаты имеются до начала операции.
- Размер имплантата(ов) для данного случая должен быть определен до начала операции. Во время операции должен быть достаточный запас имплантатов, включая размеры больше и меньше, чем которые предполагается использовать.
- Дополнительные стерильные имплантаты должны быть в наличии на случай непредвиденной необходимости.

Во время операции

- Необходимо тщательно соблюдать все инструкции по эксплуатации.
- Вблизи спинного мозга и нервных корешков всегда следует соблюдать особую осторожность. Повреждение нервов приведет к потере неврологических функций.
- Если конфигурация кости не позволяет использовать имеющийся временный аппарат внутренней фиксации, а контурирование абсолютно необходимо, рекомендуется, чтобы такое контурирование было постепенным, и следует соблюдать большую осторожность, чтобы избегать зазубрин или царапин на поверхности устройства (устройств). Компоненты не следует многократно или чрезмерно сгибать больше, чем это абсолютно необходимо. Компоненты не должны быть согнуты в обратном порядке в одном и том же месте.
- Поверхности имплантатов не должны подвергаться царапинам или насечкам, поскольку такие действия могут снизить функциональную прочность конструкции.
- Костные трансплантаты должны быть установлены в области, подлежащей сращению, и трансплантат должен быть протянут от верхнего к нижнему позвонку.
- Не следует использовать костный цемент, так как этот материал затрудняет или делает невозможным удаление компонентов. Тепло, выделяемое в процессе затвердевания, также может вызвать неврологическое повреждение и некроз кости.
- Перед закрытием мягких тканей все винты должны быть установлены на пластину. После завершения работы убедитесь, что ни один из винтов не ослаб во время затягивания других винтов. Также закрепите стопорный

- Additional sterile implants should be available in case of any unexpected need.

Intraoperative

- Any instruction manuals should be carefully followed.
- At all times, extreme caution should be used around the spinal cord and nerve roots. Damage to nerves will cause loss of neurological functions.
- When the configuration of the bone cannot be fitted with an available temporary internal fixation device, and contouring is absolutely necessary, it is recommended that such contouring be gradual and great care be used to avoid notching or scratching the surface of the device(s). The components should not be repeatedly or excessively bent any more than absolutely necessary. The components should not be reverse bent at the same location.
- The implant surfaces should not be scratched or notched, since such actions may reduce the functional strength of the construct.
- Bone grafts must be placed in the area to be fused and the graft must be extended from the upper to the lower vertebrae to be fused.
- Bone cement should not be used since this material will make removal of the components difficult or impossible. The heat generated from the curing process may also cause neurologic damage and bone necrosis.
- Before closing the soft tissues, all of the screws should be seated onto the plate. Recheck the tightness of all screws after finishing to make sure that none has loosened during the tightening of the other screws. Also secure the locking screw into place to cover the portion of the screw heads which are located at the ends of the plate. Failure to do so may result in screw loosening.

винт на место, чтобы закрыть часть головок винтов, расположенных на концах пластины. Несоблюдение этого требования может привести к ослаблению винтов.	
Пробное введение Выберите пробную пластину предполагаемой длины и поместите ее на тело позвонка для определения фактической длины пластины. При желании, удерживайте пробную шейную пластину на месте временно фиксирующим штифтом. С помощью самофиксирующей отвертки штифт можно вставить либо в центральное, либо в медиальное/латеральное отверстия для поддержки пробного отбора; в последнем случае можно проводить множественный отбор проб без извлечения штифта из тела позвонка.	Trial insertion Select a Trial Plate of the estimated length and place it on the vertebral body to determine the actual plate length. If desired, hold the Trial Cervical Plate in place with the Temporary Fixation Pin. Using the Self-Retaining Screwdriver the pin can be inserted either in the central or in the medial/lateral holes to support the trial selection; in this latter case multiple sampling can be performed without remove the pin from the vertebral body.
Подготовка и позиционирование пластин После определения длины пластины выберите подходящую шейную пластину Mecta-C и убедитесь, что лордоз пластины соответствует анатомии пациента. ПРИМЕЧАНИЕ: Пластина шейная Mecta-C уже снабжена лордотическим изгибом; при необходимости можно использовать сгибатель шейной пластины для контурирования пластины, чтобы увеличить или уменьшить лордотический изгиб. Установите выбранную пластину Mecta-C в нужное положение на тело позвонка и, при желании, зафиксируйте ее с помощью ранее описанных систем штифтов временной фиксации. Вставьте самоцентрирующееся шило в отверстие пластины, чтобы перфорировать наружную кору; глубину перфорации можно контролировать с помощью шкалы, расположенной на стержне самоцентрирующегося шила.	Plate preparation and positioning After the plate length has been determined with the Trial selection, choose the appropriate Mecta-C Cervical Plate and ensure that the plate's lordosis fits with the patient's anatomy. NOTE: The Mecta-C cervical plate is already provided with a lordotic curve; if required, a Cervical Plate Bender can be used to contour the plate in order to increase or decrease the lordotic curvature. Place the selected Mecta-C cervical plate in the desired position onto the vertebral body and if desired, hold it in place with the Temporary Fixation Pin systems previously described. Insert the Self-centering Awl into the plate hole to perforate the outer cortex; the depth of perforation can be controlled with the scale located on the Self-centering Awl shaft.

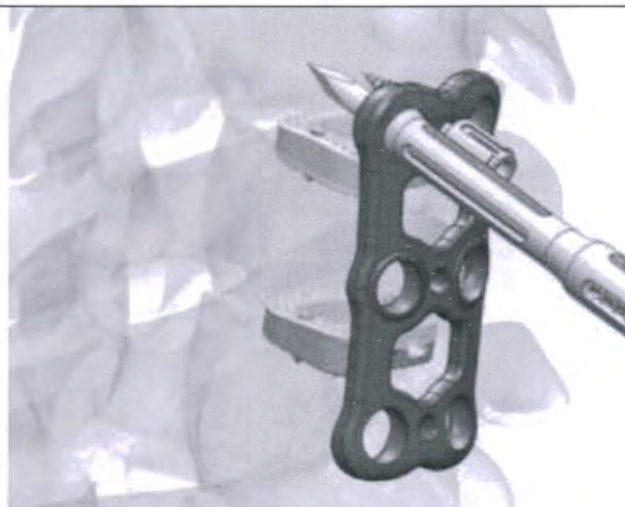


Рис.12 Установка пластины / Fig.12 Plate setup

После подготовки тела позвонка хирург может планировать введение винта шейного. Длина имплантируемого винта устанавливается в зависимости от анатомии позвонка.

Перед тем как начать вставлять винт, соберите самозажимную отвертку (Рис.13): добавьте фиксирующую втулку (А) к основному корпусу отвертки (В).

After the vertebral body has been prepared, the surgeon can plan for the cervical screw insertion. The length of the screw to be implanted is established in relation to the vertebral anatomy.

Before starting to insert the screw, assemble the SelfRetaining Screwdriver (fig.13): add the Retaining Sleeve (A) to the Screwdriver Main Body (B).

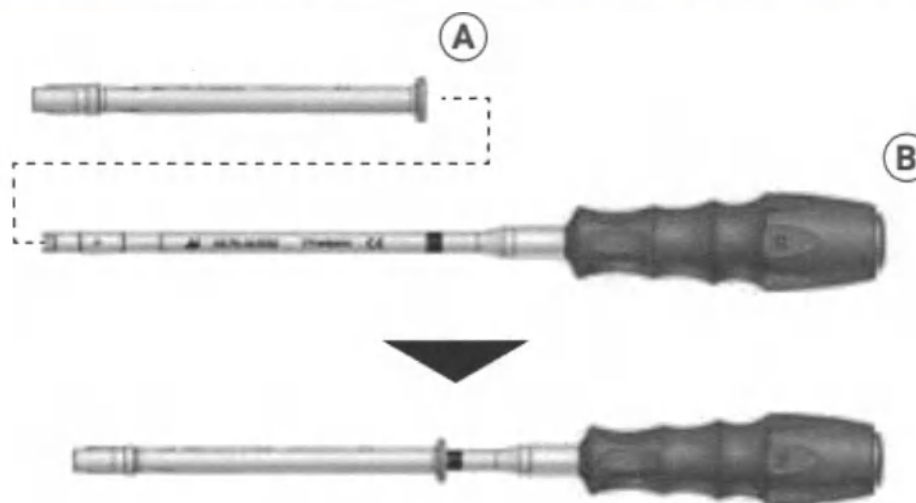


Рис.13 Сборка отвертки / Fig.13 Screwdriver assemble

Как только винт будет правильно зафиксирован с помощью самозажимной отвертки, вставьте винт в отверстие шейной пластины Мекта-С до упора.

Просверлите остальные отверстия, измерьте и вставьте оставшиеся винты, используя ту же технику.

ВНИМАНИЕ

При установке винта избегайте приложения изгибающих усилий к самофиксирующейся отвертке, так как это может привести к повреждению винта и повреждению инструмента.

Once the screw is properly engaged with the Self-Retaining Screwdriver, insert the screw through the Mecta-C cervical plate hole until seated. Drill the remaining holes, measure and insert the remaining screws using the same technique.

CAUTION

When placing the screw, avoid to exert bending forces onto the Self Retaining screwdriver as these can result in screw and instrument damages.

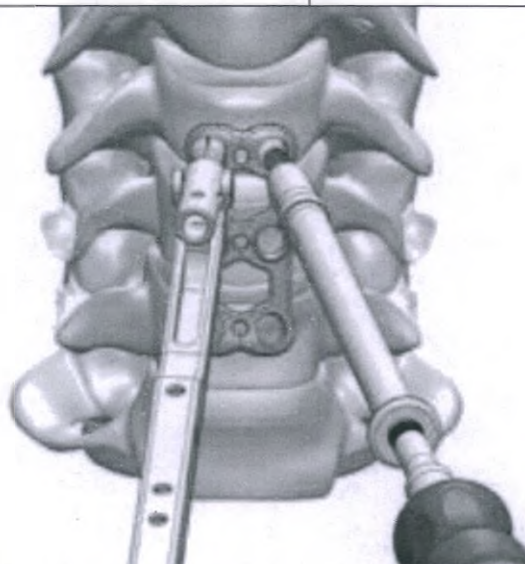


Рис. 14 Установка винтов / Fig. 14 Screw setup

Для окончательной фиксации предварительно смонтированных винтов задействуйте контр-крутящий момент и затягивайте до тех пор, пока тактильный звук не укажет на то, что винт окончательно затянут.

For the final locking of the pre-assembled screws, engage the Counter Torque to the Final Locking Screwdriver and tighten until a tactile sound indicates the final screw tightening has been achieved.

Послеоперационный период

Postoperative

Послеоперационные указания и предупреждения врача для пациента и соответствующее соблюдение их пациентом являются чрезвычайно важными, чрезвычайно важны.

The physician's postoperative directions and warnings to the patient and the corresponding patient compliance, are extremely important.

- Пациенту должны быть даны подробные инструкции по использованию и ограничениям устройства. Если рекомендуется или требуется частичная переноска веса до прочного костного сращения, пациент должен быть предупрежден о том, что сгибание, ослабление или поломка компонентов - это осложнения, которые могут возникнуть в результате чрезмерного или раннего поднятия веса или чрезмерной мышечной активности. Риск

- Detailed instructions on the use and limitations of the device should be given to the patient. If partial weightbearing is recommended or required prior to firm bony union, the patient must be warned that bending, loosening or breakage of the components are complications which can occur as a result of excessive or early weight-bearing or excessive muscular activity. The risk of bending, loosening, or breakage of a temporary internal fixation device during postoperative rehabilitation

сгибания, расшатывания или поломки временного устройства внутренней фиксации во время послеоперационной реабилитации может быть повышен, если пациент ведет активный образ жизни, или если пациент ослаблен, слабоумный или по другим причинам не может использовать костыли или другие подобные приспособления для поддержания веса. Пациент должен быть предупрежден, о избежаниях падений или резких толчков в положении позвоночника.

- Для обеспечения максимальных шансов на успешный хирургический результат: пациент или устройство не должны подвергаться воздействию механическим вибрациям, которые могут ослабить конструкцию устройства. Пациент должен быть предупрежден о такой возможности и проинструктирован об ограничении физической активности, особенно подъема и скручивания, а также любого вида спорта. Пациенту следует рекомендовать не курить и не употреблять алкоголь во время заживления костного трансплантата.

- Пациента следует предупредить о невозможности сгибания в точке соединения позвонков и научить его компенсировать это постоянное физическое ограничение движения тела.

- Если развивается не сращение или если компоненты ослабевают, сгибаются и/или ломаются, устройство (устройства) должно быть пересмотрено и/или удалено немедленно, пока не произошла серьезная травма. Неспособность иммобилизовать отсроченный или не срастающийся костный фрагмент приведет к чрезмерным и повторяющимся нагрузкам на имплантат. По механизму усталости эти нагрузки могут вызвать изгиб, расшатывание или поломку устройства (устройств). Важно, чтобы иммобилизация места хирургического вмешательства на позвоночнике сохранялась до тех пор, пока не будет установлено прочное костное сращение, подтвержденное рентгенографическим исследованием. Пациент должен быть адекватно предупрежден об этих опасностях и находиться под тщательным наблюдением для обеспечения сотрудничества до тех пор, пока не будет подтверждено костное сращение.

- Имплантаты системы передних шейных пластин Mecta-C являются временными устройствами внутренней фиксации. Внутренняя фиксация предназначена для стабилизации места операции во время нормального процесса заживления. После сращения позвоночника эти устройства не имеют функционального назначения и должны быть удалены. У большинства пациентов удаление показано потому, что

may be increased if the patient is active, or if the patient is debilitated, demented or otherwise unable to use crutches or other such weight supporting devices. The patient should be warned to avoid falls or sudden jolts in spinal position.

- To allow the maximum chances for a successful surgical result: the patient or device should not be exposed to mechanical vibrations that may loosen the device construct. The patient should be warned of this possibility and instructed to limit and restrict physical activities, especially lifting and twisting motions and any type of sport participation. The patient should be advised not to smoke or consume alcohol during the bone graft healing process.

- The patient should be advised of their inability to bend at the point of spinal fusion and taught to compensate for this permanent physical restriction in body motion.

- If a non-union develops or if the components loosen, bend, and/or break, the device(s) should be revised and/or removed immediately before serious injury occurs. Failure to immobilize a delayed or non-union of bone will result in excessive and repeated stresses on the implant. By the mechanism of fatigue these stresses can cause eventual bending, loosening, or breakage of the device(s). It is important that immobilization of the spinal surgical site be maintained until firm bony union is established and confirmed by roentgenographic examination. The patient must be adequately warned of these hazards and closely supervised to ensure cooperation until bony union is confirmed.

- The Mecta-C Anterior Cervical Plate System implants are temporary internal fixation devices. Internal fixation devices are designed to stabilize the operative site during the normal healing process. After the spine is fused, these devices serve no functional purpose and should be removed. In most patient's removal is indicated because the implants are not intended to transfer or support forces developed during normal activities. If the device is not removed following completion of its intended use, one or more of the following complications may occur:

- (1) Corrosion, with localized tissue reaction or pain,
- (2) Migration of implant position possibly resulting in injury,
- (3) Risk of additional injury from post-operative trauma,
- (4) Bending, loosening and/or breakage, which could make removal impractical or difficult,
- (5) Pain, discomfort, or abnormal sensations due to the presence of the device,

имплантаты не предназначены для переноса и/или поддержки сил, возникающих во время нормальной деятельности. Если устройство не будет удалено после завершения использования по назначению, может возникнуть одно или несколько из следующих осложнений:

- (1) Коррозия, сопровождающаяся локальной реакцией тканей или болью,
- (2) Миграция положения имплантата, которая может привести к травме,
- (3) риск дополнительного повреждения в результате послеоперационной травмы,
- (4) изгиб, расшатывание и/или поломка, которые могут сделать
- (5) Боль, дискомфорт или ненормальные ощущения из-за присутствия устройства,
- (6) Возможный повышенный риск инфекции,
- (7) Потеря костной ткани из-за экранирования напряжения. Хотя окончательное решение об удалении имплантата должен принимать хирург, Ассоциация производителей ортопедической хирургической продукции придерживается следующей позиции.

Когда это возможно и целесообразно для конкретного пациента, устройства для фиксации кости должны быть удалены особенно у молодых и более активных пациентов. Любое решение об удалении устройства, следует принимать во внимание потенциальный риск повторного хирургического вмешательства для пациента и сложность удаления. За удалением имплантата должно следовать адекватное послеоперационное ведение, во избежание перелома.

- Любые извлеченные устройства должны быть обработаны таким образом, чтобы повторное использование в другой хирургической процедуре было невозможным. Как и все ортопедические имплантаты, ни один из компонентов системы передних шейных пластин Mecta-C никогда не должен использоваться повторно ни при каких обстоятельствах.

4.3. Условия применения/эксплуатации МИ

Условия окружающей среды: Значения температуры относятся к СанПиН 2.1. 3678-20, приложение 3.

Условия эксплуатации:

Влажность 100%, температура 32-42 ° C, как в человеческом теле.

Таблица 1. Условия применения/эксплуатации МИ

Условия окружающей среды	
Влажность	Нет специальных условий

(6) Possible increased risk of infection, and

(7) Bone loss due to stress shielding.

While the surgeon must make the final decision on implant removal, it is the position of the Orthopedic Surgical Manufacturers Association that whenever possible and practical for the individual patient, bone fixation devices should be removed once their service as an aid to healing is accomplished, particularly in younger and more active patients. Any decision to remove the device should take into consideration the potential risk to the patient of a second surgical procedure and the difficulty of removal. Implant removal should be followed by adequate postoperative management to avoid fracture.

- Any retrieved devices should be treated in such a manner that reuse in another surgical procedure is not possible. As with all orthopaedic implants, none of the Mecta-C Anterior Cervical Plate System components should ever be reused under any circumstances.

4.3. Use/operation conditions of MD

As for environmental conditions: Temperature figures refer to SanPiN 2.1. 3678-20, appendix 3.

As for operation conditions:

Humidity is 100% and temperature is 32-42°C as it is inside a human body.

Table 1. Use/operation conditions of MD

Environmental conditions	
Humidity	No special conditions

Температура	От 21 °С до 24°С			Temperature	From 21 °C to 24°C		
Давление	Нет специальных условий			Pressure	No special conditions		
Условия эксплуатации				Operation conditions			
Влажность	100%			Humidity	100%		
Температура	От 32 °С до 42 °С			Temperature	From 32 °C to 42 °C		
Давление	Нет специальных условий			Pressure	No special conditions		

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МИ / DESCRIPTION OF MAIN FUNCTIONAL ELEMENTS OF MD

5.1. Общее описание функциональных элементов МИ / General description of functional elements of MD


В Таблице 2 модельные ряды изделий, для которых соответствует тот или иной внешний вид и описание, записаны в виде: первое изделие модельного ряда -...- последнее изделие модельного ряда согласно пункту 1.1 выписки из технического файла.

Пример: Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм - ... - Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм

In Table 2, the product lines for which one or another appearance and description correspond are written in the form: the first product of the line -...- the last product of the line according to point 1.1 of technical file.

Example: Variable self-drilling screw diam. 4x12mm - ... - Variable self-drilling screw diam. 4x22mm

Таблица 2. Общее описание функциональных элементов МИ / Table 2. General description of functional elements of MD

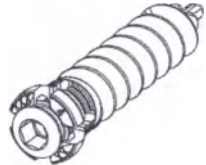Внешний вид / Appearance	Наименование и краткое описание изделия	Name of MD and its general description
	Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм - ... - Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 12мм - ... - Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 22мм	Variable self-drilling screw diam. 4x12mm - ... - Variable self-drilling screw diam. 4x22mm Fixed self-drilling screw diam. 4x12mm - ... - Fixed self-drilling screw diam. 4x22mm
Рис.15 / Fig.15	Устройство, используемое для внутренней фиксации позвоночника путем ввинчивания в позвоночник для крепления пластин к кости. Устройство, обычно используемое для обеспечения стабилизации сегмента позвоночника при лечении различных нестабильностей или деформаций позвоночника.	A device used for internal spinal fixation by being screwed into the spine to hold plates to bone. A device used typically used to provide stabilization of spinal segment in the treatment of various spinal instabilities or deformities.

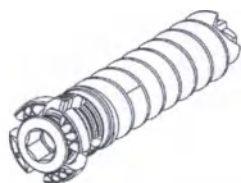


Рис.16 / Fig.16

Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм - ... - Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм

Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм - ... - Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм

Устройство, используемое для внутренней фиксации позвоночника путем ввинчивания в позвоночник для крепления пластин к кости. Устройство, обычно используемое для обеспечения стабилизации сегмента позвоночника при лечении различных нестабильностей или деформаций позвоночника.

Variable self-tapping screw diam. 4x12mm - ... - Variable self-tapping screw diam. 4x22mm

Fixed self-tapping screw diam. 4x12mm - ... - Fixed self-tapping screw diam. 4x22mm

A device used for internal spinal fixation by being screwed into the spine to hold plates to bone. A device used typically used to provide stabilization of spinal segment in the treatment of various spinal instabilities or deformities.

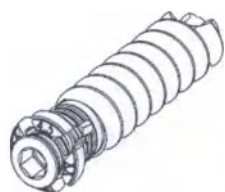


Рис.17 / Fig.17

Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 12мм - ... - Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22мм

Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм - ... - Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22мм

Устройство, используемое для внутренней фиксации позвоночника путем ввинчивания в позвоночник для крепления пластин к кости. Устройство, обычно используемое для обеспечения стабилизации сегмента позвоночника при лечении различных нестабильностей или деформаций позвоночника.

Variable self-tapping screw diam. 4.5x12mm - ... - Variable self-tapping screw diam. 4.5x22mm

Fixed self-tapping screw diam. 4.5x12mm - ... - Fixed self-tapping screw diam. 4.5x22mm

A device used for internal spinal fixation by being screwed into the spine to hold plates to bone. A device used typically used to provide stabilization of spinal segment in the treatment of various spinal instabilities or deformities.

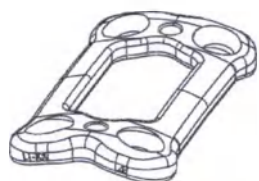


Рис.18 / Fig.18

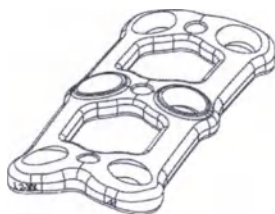


Рис.19 / Fig.19



Рис.20 / Fig.20

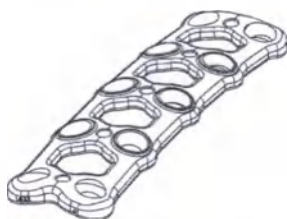


Рис.21 / Fig.21

Пластина шейная одноуровневая 20мм - ... - Пластина шейная одноуровневая 34мм (Рис.18)

Пластина шейная двухуровневая 34мм - ... - Пластина шейная двухуровневая 52мм (Рис.19)

Пластина шейная трехуровневая 52мм - ... - Пластина шейная трехуровневая 76мм (Рис.20)

Пластина шейная четырехуровневая 68мм - ... - Пластина шейная четырехуровневая 92мм (Рис.21)

Устройство, обычно используемое для обеспечения стабилизации сегмента позвоночника при лечении различных нестабильностей или деформаций позвоночника.


Cervical Plate L1x20mm - ... - Cervical Plate L1x34mm (Fig.18)

Cervical Plate L2x34mm - ... - Cervical Plate L2x52mm (Fig.19)

Cervical Plate L3x52mm - ... - Cervical Plate L3x76mm (Fig.20)

Cervical Plate L4x68mm - ... - Cervical Plate L4x92mm (Fig.21)

A device typically used to provide stabilization of spinal segment in the treatment of various spinal instabilities or deformities.

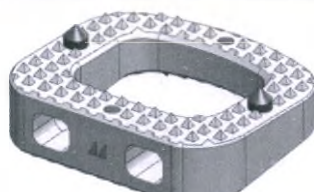

Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x4 - ... - Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x9 (Рис.22)

Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x4 L7° - ... - Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x9 L7° (Fig.22)

Рис.22 / Fig.22

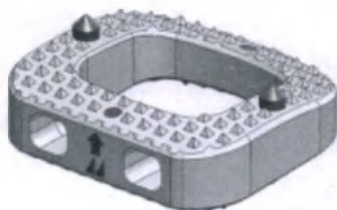


Рис.23 / Fig.23

Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x4 - ... - Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x9 (Рис.23)

Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x4 с Ti метками - ... - Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x9 с Ti метками (Рис.22)

Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x4 с Ti метками - ... - Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x9 с Ti метками (Рис.23)

Устройство, которое используется для замены диска с целью восстановления высоты структуры позвоночного столба. Изготавливается из полиэфирэфиркетона. Устройство предназначено для использования в сочетании с дополнительной фиксацией.

Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x14x4 L5° - ... - Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 15x18x9 L5° (Fig.23)

Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x4 L7°- Ti markers - ... - Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x9 L7°- Ti markers (Fig.22)


Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x14x4 L5°- Ti markers - ... - Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 15x18x9 L5°- Ti markers (Fig.23)

A device that is used to replace the disc in order to restore the height of the spinal column structure. It is made of PEEK. The device is intended to be used in combination with additional fixation.

Рис.24 / Fig.24



Рис.25 / Fig.25

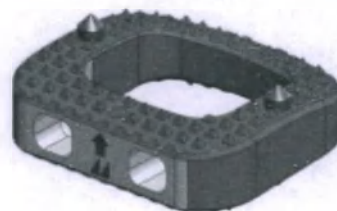

Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x4 - ... - Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x9 (Рис.24)

Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x4 - ... - Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x9 (Рис.25)

Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x4 с Ti метками - ... - Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x9 с Ti метками (Рис.24)

Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x4 с Ti метками - ... - Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x9 с Ti метками (Рис.25)

Устройство, которое используется для замены диска с целью восстановления высоты структуры позвоночного столба. Оно

Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x14x4 L7° - ... - Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x9 L7° (Fig.24)

Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x14x4 L5° - ... - Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x9 L5° (Fig.25)

Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x14x4 L7°- Ti markers - ... - Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x9 L7°- Ti markers (Fig.24)

Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x14x4 L5°- Ti markers - ... - Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x9 L5°- Ti markers (Fig.25)

	изготовлено из полиэфирэфиркетона с титановым покрытием. Устройство предназначено для использования в сочетании с дополнительной фиксацией.	A device that is used to replace the disc in order to restore the height of the spinal column structure. It is made of PEEK with a titanium coating on top of it. The device is intended to be used in combination with additional fixation.
5.2. Возможность и методы интеграции с другими медицинскими изделиями Ни при каких обстоятельствах не допускается использование модульного компонента имплантата Medacta International S.A. в сочетании с компонентом другого изготовителя, если иное не указано компанией «Медакта Интернационал С.А.». Необходимо соблюдать инструкции по использованию конкретной продукции, описанные производителем. Производитель не несет ответственность за любые осложнения, возникшие в результате смешивания деталей или в результате использования изделий других производителей. Не допускается объединять компоненты различных систем компании «Медакта Интернационал С.А.», кроме случаев, когда в хирургической методике это рекомендуется. Совместимость и сборка компонентов должны быть проверены с применением соответствующего оборудования. Перед сборкой важно проверить чистоту контактных поверхностей и убедиться, что между ними отсутствуют включения. Запрещается повторная имплантация имплантатов. В то время как имплантат может выглядеть неповрежденным, могут возникнуть микроскопические дефекты, которые приведут к неисправности имплантата. В данное время инструменты готовятся к прохождению процедуры регистрации на территории РФ, точное наименование и номер регистрационного удостоверения будут указаны после завершения процедуры регистрации.		5.2. The possibility and ways of integrating with other medical devices Under no circumstances should a Medacta International modular implant component be used in combination with a component from another manufacturer, if it is not specified otherwise. The manufacturer's instructions for use of the specific product must be followed. The manufacturer is not responsible for any complications resulting from mixing parts or from the use of products from other manufacturers. The components of the various Medacta International systems must not be combined, unless the operative technique recommends it. Component compatibility and assembly must be checked using appropriate instrumentation. It is important to inspect the contact surfaces for cleanliness and check that there is nothing interposed before assembling them. Implants should never be reimplanted. While the implant may appear undamaged, microscopic defects may occur and cause implant failure. At the moment the instruments are being prepared for the registration procedure in the territory of the Russian Federation, the exact name and number of the registration certificate will be specified after the registration procedure is completed.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИ Все МИ являются имплантатами, тип и длительность контакта с организмом человека – изделия постоянного контакта (более 30 суток) с мягкими и костными тканями. Используемые материалы МИ: Сплав Ti6Al4V ELI, Полиэфирэфиркетон PEEK (ASTM F 2026) , Тантал Tantalum (ISO 13782 / ASTM F 560), Покрытие из технически чистого титана CPTi ASTM 1580	6. LIST AND DESCRIPTION OF MD MATERIALS All medical devices are permanent implants, therefore type of contact is permanent. Used material MD: PEEK(ASTM F 2026), Ti6Al4V (ISO 5832/3), CPTi ASTM 1580, Tantalum (ISO 13782 / ASTM F 560), CPTi ASTM 1580
7. ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ МИ Не применимо	7. DESCRIPTION OF MD PARTS Non-applicable
8. ОПИСАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ Не применимо	8. DESCRIPTION OF ACCESSORIES Non-applicable



9. ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ МИ / 9. DATA ABOUT LABELING OF MD

На самом изделии с помощью гравировки может быть указана следующая информация / The following information can be indicated on the device using engraving:

- логотип производителя / manufacturer logo;
 - номер по каталогу / REF number;
 - номер партии / LOT number;
- размер имплантата: высота, длина, ширина / implant size: height, width

Таблица 3. Значения символов, указанных на русскоязычной маркировке упаковки / Table 3. Interpretation of symbols used on the Russian label

	Изготовитель	Manufacturer
	Дата изготовления	Date of manufacture
	Запрет на повторное применение	Do not reuse
	Не стерилизовать повторно	Do not resterilize
	Осторожно, обратите внимание на прилагающиеся к изделию документы	Caution, read the accompanying documents
	Обратитесь к инструкции по эксплуатации	Consult instructions to use
	Не допускать воздействия солнечного света	Do not expose to sunlight
	Беречь от влаги	Store in a dry place
	Совместимо с МРТ	MR Conditional

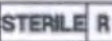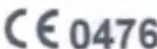	Не использовать при повреждении упаковки	Do not use if package is damaged
	Использовать до (ГГГГ-ММ-ДД)	Use by (YYYY-MM-DD)
	Код партии	Lot number
	Номер по каталогу	Reference number
	Радиационная стерилизация	Sterilization by radiation
	Европейское соответствие	European Conformity
	Глобальный номер товарной позиции	Global Trade Item Number
	Диапазон влажности	Humidity Limitation
	Температурный интервал	Temperature Limit

9.1. Срок годности, срок службы

Срок годности для всех имплантатов составляет 5 лет.

После сращения костей устройство может оставаться постоянно имплантированным пациенту, пока анатомическая нагрузка воспринимается окружающей костной структурой. Если костное сращение не произойдет в ожидаемые сроки, может произойти поломка или расшатывание устройства.

9.1. Shelf life, use by date

Shelf life for all devices is 5 years.

After bony fusion occurs, the device may remain permanently implanted in the patient while the anatomical loading is absorbed by the surrounding bone structure. If bony fusion does not occur within the timeframe expected, device breakage or loosening may occur.

Mecta-C implant system for the cervical spine are designed to serve as a mechanical stabilizing aid that will allow interbody fusion and/or

Система имплантатов Места-С для шейного отдела позвоночника предназначена для механической стабилизации, которая позволяет проводить межтеловое сращение и/или заднелатеральное сращение, предотвращая чрезмерное относительное смещение позвонков. Процесс сращения происходит постепенно и в большинстве случаев завершается в течение 12 месяцев, как указано в ASTM F 2077-18, § X 1.8. Имплантируемые устройства предназначены для использования до тех пор, пока не произойдет обычное сращение. Однако ряд факторов, перечисленных в соответствующих инструкциях по применению, может задержать или предотвратить сращение. В этих случаях устройство может подвергаться ненормальным усталостным нагрузкам и повышенному движению на границе кость-имплантат, что вызывает повышенное усталостное напряжение имплантата, которое в конечном итоге может привести к механическому разрушению имплантата.	posterior-lateral fusion to take place, preventing excessive relative movement of the instrumented vertebrae. Such fusion process is progressive and in most cases it completes within 12 months, as stated in the ASTM F 2077-18, § X 1.8. The implantable devices are meant to last until a regular fusion process has taken place. However, several factors, listed in the relevant instructions for use, may delay or prevent fusion. In these cases, the device may be subject to abnormal fatigue loads and increased movement at the bone-implant interface which cause increased fatigue stress on the implant that could ultimately lead to mechanical breakage of the implant.
9.2. Форма поставки Изделие поставляется в индивидуальной стерильной упаковке, сопровождается оригинальной и русскоязычной маркировкой и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Количество изделий в упаковке указано на маркировке.	9.2. Form of supply The product is supplied in an individual sterile package with original and Russian labels and instruction for use in Russian. Quantity of devices in a package is indicated on the label.

10. ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ Процесс управления рисками в компании Medacta International (Медакта Интернационал) соответствует стандарту EN ISO 14971:2012.	10. LIST OF RISKS Medacta's Risk Management process is in accordance with EN ISO 14971:2012.
11. СВЕДЕНИЯ О ВЕРИФИКАЦИИ И ВАЛИДАЦИИ МИ Производитель разрабатывает все продукты в соответствии с EN ISO 13485, Медицинское оборудование - Системы менеджмента качества. Изделия спроектированы, разработаны, изготовлены и упакованы в соответствии с утвержденными стандартными операционными процедурами и процессами документирования.	11. DATA ABOUT MD VERIFICATION AND VALIDATION The manufacturer develops all products in compliance with EN ISO 13485, Medical Devices – Quality Management Systems. The devices were designed, developed, manufactured and packaged in accordance with validated standard operating procedures and good documentation processes.
12. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ Не применимо	12. LIST OF MATERIALS OF ANIMAL AND (OR) HUMAN ORIGIN Non-applicable

13. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ИСПЫТАНИЯХ, ПРОТОКОЛАХ ИСПЫТАНИЙ, АНАЛИЗЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Изделия выдержали испытания по верификации и валидации и удовлетворяют требованиям следующих стандартов:

Таблица 4. Перечень международной нормативной документации

Стандарт/документ	Описание
93/42/ЕЕС	ДИРЕКТИВА СОВЕТА 93/42/ЕЕС от 14 июня 1993 года по вопросу медицинского оборудования
2005/50/ЕС	ДИРЕКТИВА КОМИССИИ 2005/50/ЕС от 11 августа 2005 года о реклассификации протезов тазобедренного, коленного и плечевого суставов в рамках Директивы Совета 93/42/ЕЕС о медицинских изделиях
ISO 13485	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования
ISO 19011	Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента
21 CFR Part 820	Управление по контролю за продуктами и лекарствами - Медицинские изделия; Текущая надлежащая производственная практика (CGMP); Заключительное правило - 7 октября 1996 г.
ISO 14155 2011	Клинические исследования медицинских изделий для людей - Надлежащая клиническая практика
UNI EN ISO 14630 2013	Имплантаты хирургические неактивные. Общие требования
SOR/98-282	Канадские правила по медицинским изделиям, опубликованные Министерством здравоохранения Канады
EN 1041	Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем
UNI CEI EN ISO 14971	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям

13. INFORMATION ON THE TESTS CARRIED OUT, TEST REPORTS, ANALYSIS OF THE OBTAINED DATA

The devices have passed verification and validation tests and meet the requirements of the following standards:

Table 4. List of international standards and documents

Standard/Document	Description
93/42/EEC	COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices
2005/50/EC	COMMISSION DIRECTIVE 2005/50/EC of 11 August 2005 on the reclassification of hip, knee and shoulder joint replacements in the framework of Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices
ISO 13485	Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory purposes
ISO 19011	Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing
21 CFR Part 820	Food and Drug Administration – Medical Devices; Current Good Manufacturing Practice (CGMP); Final Rule – October 7, 1996
ISO 14155 2011	Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice
UNI EN ISO 14630 2013	Non-active surgical implants - General requirements
SOR/98-282	Canadian Medical Devices Regulations as published by Health Canada
EN 1041	Information supplied by the manufacturer with medical devices
UNI CEI EN ISO 14971	Medical devices - Application of risk management to medical devices
ISO 14155	Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice

ISO 14155	Клинические исследования. лежащая клиническая практика
MEDDEV 2.7/1	Клиническая оценка: руководство для производителей и нотифицированных органов в соответствии с директивами 93/42/ЕЕС и 90/385/ЕЕС
UNI EN ISO 4288	Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности: профильный метод. Правила и процедуры оценки структуры поверхности
ASTM F1582	Стандартные терминологии, касающиеся спинальных имплантатов
ASTM F1717	Стандартные методы испытаний конструкций спинальных имплантатов в модели вертебрэктомии
ASTM F2077	Методы испытаний устройств для межпозвоночного спондилодеза
ASTM F2267	Стандартный метод испытаний для измерения нагрузки проседания устройств для межпозвоночного спондилодеза при статическом осевом сжатии
FDA Guidance	Руководство по спинальным системам 510(k) выпущено: 3 мая 2004 года
FDA Guidance	Руководство по устройствам для сращения межпозвонковых тел Документ выпущен: 12 июня 2007 г.
ISO 5832-3	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 3. Деформируемый сплав на основе титана, 6-алюминия и 4-ванадия
ASTM F136	Стандартная спецификация на деформируемый титан-6 алюминий-4 ванадиевый сплав ELI для применения в хирургических имплантатах
ASTM F2026	Стандартная спецификация для полиэфирэфиркетона (PEEK). Полимеры для хирургического применения
ASTM F2503-13	Стандартная практика маркировки медицинских изделий и других предметов для обеспечения безопасности в магнитно-резонансной среде
ASTM F2052	Метод стандартной пробы для измерения магнитно вызванной силы смещения на медицинских устройствах в окружающей среде магнитного резонанса
ASTM F2182	Стандартный метод испытания для измерения радиочастотного индуцированного нагрева на или

MEDDEV 2.7/1	Clinical evaluation: a guide for manufacturers and notified bodies under directives 93/42/EEC and 90/385/EEC
UNI EN ISO 4288	Geometrical Product Specification (GPS) – Surface texture: Profile method – Rules and procedures for the assessment of surface texture
ASTM F1582	Standard Terminology Relating to Spinal Implants
ASTM F1717	Standard Test Methods for Spinal Implant Constructs in a Vertebrectomy Model
ASTM F2077	Test Methods For Intervertebral Body Fusion Devices
ASTM F2267	Standard Test Method for Measuring Load Induced Subsidence of an Intervertebral Body Fusion Device Under Static Axial Compression
FDA Guidance	Guidance for Spinal System 510(k)s issued on: May 3, 2004
FDA Guidance	Guidance for Intervertebral Body Fusion Device Document issued on: June 12, 2007
ISO 5832-3	Implants for surgery – Metallic materials – Part 3: Wrought titanium 6- aluminium 4- vanadium alloy.
ASTM F136	Standard specification for Wrought Titanium-6Aluminium-4Vanadium ELI (ExtLow Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications.
ASTM F2026	Standard Specification for Polyetheretherketone (PEEK) Polymers for Surgical Implant Applications
ASTM F2503-13	Standard Practice for Marking Medical Devices and Other Items for Safety in the Magnetic Resonance Environment
ASTM F2052	Standard test method for measurement of magnetically induced displacement force on medical devices in the magnetic resonance environment
ASTM F2182	Standard test method for measurement of radio frequency induced heating on or near passive implants during magnetic resonance imaging

	вблизи пассивных имплантатов во время магнитно-резонансной томографии
ASTM F2213-06	Метод стандартной пробы для измерения магнитно вызванного вращающего момента на медицинских устройствах в окружающей среде магнитного резонанса
ASTM F1044	Стандартный метод испытания на сдвиг кальций-фосфатного покрытия и металлических покрытий
ASTM F1147	Стандартный метод испытания на растяжение покрытий из фосфата кальция и металлических покрытий
ASTM F1160	Стандартный метод испытания на усталость при сдвиге и изгибе кальций-фосфатных и металлических медицинских покрытий
ASTM F1580	Стандартная спецификация на порошки титана и сплава титан-6 алюминий-4 ванадий для покрытия хирургических имплантатов
ASTM F1854	Стандартный метод испытания для стереологической оценки пористого покрытия на медицинских имплантатах
ASTM F1978	Стандартный метод испытания для измерения стойкости к истиранию металлических покрытий термического напыления с помощью абразива Табера
NF S 94-091	Валидация очистки ортопедических имплантатов перед окончательной упаковкой
ASTM F3127	Стандартное руководство по валидации процессов очистки, используемых при производстве медицинских изделий
ASTM F 2459	Стандартный метод испытания для извлечения остатков из металлических медицинских компонентов и их количественного определения с помощью гравиметрического анализа
USP <788>	Тест на содержание твердых частиц в инъекциях для парентеральных препаратов большого объема
Pharmacopoeia Europea	9-ое издание
ISO 10993-1	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования

ASTM F2213-06	Standard test method for measurement of magnetically induced torque on medical devices in the magnetic resonance environment
ASTM F1044	Standard Test Method for Shear Testing of Calcium Phosphate Coating and Metallic Coatings
ASTM F1147	Standard Test Method for Tensile Testing of Calcium Phosphate Coatings and Metallic Coatings
ASTM F1160	Standard Test Method for Shear and Bending Fatigue Testing of Calcium Phosphate and Metallic Medical Coatings
ASTM F1580	Standard Specification for Titanium and Titanium-6 Aluminium-4 Vanadium Alloy Powders for Coatings of Surgical Implants
ASTM F1854	Standard Test Method for Stereological Evaluation of Porous Coating on Medical Implants
ASTM F1978	Standard Test Method for Measuring Abrasion Resistance of Metallic Thermal Spray Coating by Using the Taber Abraser
NF S 94-091	Validation du nettoyage des implants orthopédiques avant conditionnement final
ASTM F3127	Standard guide for validating cleaning processes used during the manufacture of medical devices
ASTM F 2459	Standard Test Method for Extracting Residue from Metallic Medical Components and Quantifying via Gravimetric Analysis
USP <788>	Particulate Matter in Injections test for a Large Volume Parenteral (LVP)
Pharmacopoeia Europea	9th Edition
ISO 10993-1	Biological evaluation of medical devices -- Part 1: Evaluation and testing within a risk management system
ISO 10993-5	Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity
ISO 10993-11	Biological evaluation of medical devices -- Part 11: Test for systemic toxicity

ISO 10993-5	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro	ISO 10993-12	Biological evaluation of medical devices -- Part 12: Sample preparation and reference materials
ISO 10993-11	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия	USP <151>	Evaluation of pyrogens Pyrogen test procedure
ISO 10993-12	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы	ISO 11607-1	Packaging for terminally sterilized medical devices -- Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems
USP <151>	Оценка пирогенов. Процедура испытания на пироген	ISO 11607-2	Packaging for terminally sterilized medical devices -- Part 2: Validation Requirements for forming, sealing and assembling processes
ISO 11607-1	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам	ASTM F 88 / F88M	Standard test method for seal strength of flexible barrier materials
ISO 11607-2	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки	ASTM F 1886 / F1886M	Standard Test Method for Determining Integrity of Seals for Medical Packaging by Visual Inspection
ASTM F 88 / F88M	Стандартный метод испытания на прочность уплотнения гибких барьерных материалов	ASTM F 1929	Standard Test Method for Detecting Seal Leaks in Porous Medical Packaging by Dye Penetration
ASTM F 1886 / F1886M	Стандартный метод испытания для определения целостности плотности медицинской упаковки путем визуального осмотра	ASTM F 1980	Standard guide for accelerated aging of sterile barrier systems for medical devices
ASTM F 1929	Стандартный метод испытания для обнаружения утечки уплотнения в пористой медицинской упаковке путем проникновения красителя	ISO 14644-1	Clean rooms and associated controlled environments air cleanliness classification
ASTM F 1980	Стандартное руководство по ускоренному старению стерильных барьерных систем для медицинских изделий	ISO 14644-2	Clean rooms and associated controlled environments - Part 2: Specifications for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644-1
ISO 14644-1	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц	ISO 14644-3	Clean rooms and associated controlled environments -- Part 3: Test methods
ISO 14644-2	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Текущий контроль для подтверждения постоянного соответствия чистоты воздуха по концентрации частиц	ISO 14698-1	Clean Rooms and associated controlled environments – Biocontamination control – Part 1: General principals and methods
ISO 14644-3	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний	ISO 14698-2	Clean Rooms and associated controlled environments – Biocontamination control – Part 2: Evaluation and interpretation of biocontamination data
		ISO 15223-1	Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied

ISO 14698-1	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биоагрязнений. Часть 1. Общие принципы и методы	21 CFR 801	Food and Drug Administration – Medical Devices Part 801 labelling
ISO 14698-2	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биоагрязнений. Часть 2. Анализ данных о биоагрязнениях	ISO 11137-1	Sterilization of health care products -- Radiation -- Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices.
ISO 15223-1	Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования	ISO 11137-2	Sterilization of health care products -- Radiation -- Part 2: Establishing the sterilization dose.
21 CFR 801	Управление по контролю за продуктами и лекарствами - Маркировка медицинских изделий Часть 801	ISO 11137-3	Sterilization of health care products -- Radiation -- Part 3: Guidance on dosimetric aspects.
ISO 11137-1	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий	ISO 11737-1	Sterilization of medical devices -- Microbiological methods -- Part 1: Determination of a population of micro-organisms on products
ISO 11137-2	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы		
ISO 11137-3	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 3. Руководство по вопросам дозиметрии		
ISO 11737-1	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продукции		

14. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИ

14.1. Предупреждения

Система передних шейных пластин Mecta-C

Успешный результат не всегда достигается в каждом хирургическом случае. Это особенно верно в хирургии позвоночника, где многие обстоятельства могут поставить под угрозу результат. Система передних шейных пластин Mecta-C - это всего лишь временный имплантат, используемый для коррекции и стабилизации позвоночника. Эта система также предназначена для усиления процесса сращения позвоночника путем обеспечения временной стабилизации. Данная система устройств не предназначена быть единственным средством поддержки позвоночника. Костная пластика должна быть частью процедуры сращения позвоночника, в которой используется система MectaC. Использование данного изделия без костного трансплантата или в случаях, когда развивается несращение, не будет успешным. Этот спинальный имплантат не может выдерживать нагрузки тела без поддержки кости. В конечном итоге произойдет изгиб, расшатывание, демонтаж и/или поломка устройства (устройств). Предоперационное планирование и операционные процедуры, включая знание хирургических техник, правильную редукцию, а также правильный выбор и установка имплантата являются важными факторами успешного использования передней шейной пластины Mecta-C. Кроме того, правильный выбор и соблюдение требований пациента в значительной степени влияет на результаты. У пациентов, которые курят, наблюдается повышенная частота не сращений. Этих пациентов следует предупредить об этом и предупредить об этих последствиях. Пациенты с ожирением, недоеданием и/или злоупотребляющие алкоголем и/или другими наркотиками также не являются хорошими кандидатами для сращения позвоночника. Пациенты с плохим качеством мышц и костей и/или параличом нервов также не являются хорошими кандидатами для скрепления позвоночника.

Система для межпозвонкового соединения Mecta-C

- При лечении более чем одного уровня позвоночника возможно

14. MD SAFETY AND EFFECTIVENESS REQUIREMENTS

14.1. Warnings

The Mecta-C Anterior Cervical Plate System

A successful result is not always achieved in every surgical case. This fact is especially true in spinal surgery where many extenuating circumstances may compromise the results. The Mecta-C Anterior Cervical Plate System is only a temporary implant used for the correction and stabilization of the spine. This system is also intended to be used to augment the development of a spinal fusion by providing temporary stabilization. This device system is not intended to be the sole means of spinal support. Bone grafting must be part of the spinal fusion procedure in which the MectaC Anterior Cervical Plate System is utilized. Use of this product without a bone graft or in cases that develop into a non-union will not be successful. This spinal implant cannot withstand body loads without the support of bone. In this event, bending, loosening, disassembly and/or breakage of the device(s) will eventually occur. Preoperative planning and operating procedures, including knowledge of surgical techniques, proper reduction, and proper selection and placement of the implant are important considerations in the successful utilization of the Mecta-C Anterior Cervical Plate by the surgeon. Further, the proper selection and compliance of the patient will greatly affect the results. Patients who smoke have been shown to have an increased incidence of non-unions. These patients should be advised of this fact and warned of this consequence. Obese, malnourished, and/or alcohol and/or other drug abuse patients are also not good candidates for spine fusion. Patients with poor muscle and bone quality and/or nerve paralysis are also not good candidates for spine fusion.

The Mecta-C Intervertebral Fusion Device System

- When more than one involved spinal levels are treated, longer operative times and high blood loss are likely to occur.
- A successful result is not always achieved in every surgical case. This fact is especially true in spinal surgery where other patient conditions may compromise the results. Use of this product without bone graft or in cases that do not develop a union will not be successful.

- Успешный результат не всегда достигается в каждом хирургическом случае. Этот факт особенно актуален в спинальной хирургии когда другие состояния пациента могут повлиять на результат. Использование данного продукта без костного трансплантата или в случаях, когда не происходит сращения, не будет успешным.
- Предоперационные и операционные процедуры, включая знание хирургической техники и правильный выбор и имплантатов, являются важными факторами успешного использования системы хирургом. Кроме того, правильный выбор пациента в значительной степени влияют на результаты. Пациенты, которые курят, имеют более низкую частоту сращения костей. Этих пациентов следует предупредить об этом и предупредить об этих последствиях. Пациенты с ожирением, недоеданием и/или злоупотребляющие алкоголем/наркотиками, а также пациенты с плохим качеством мышц и костей и/или параличом нервов также являются плохими кандидатами на слияние позвонков.
- Пациенты, ранее перенесшие операцию на позвоночнике на уровне, подлежащем лечению, могут иметь другие клинические результаты по сравнению с пациентами, не перенесшими операцию, по сравнению с теми, кто не перенес предыдущую операцию.
- Следующие обстоятельства могут снизить вероятность успешного исхода: Признаки местного воспаления; лихорадка или лейкоцитоз; чувствительность к металлу/полимеру/аллергия на материал имплантата; грубо искаженная анатомия вследствие врожденные аномалии; остеопения и/или остеопороз; неподходящая или недостаточная костная опора, костная незрелость.
- Имплантаты Mecta-C никогда не должны быть повторно имплантированы. Хотя имплантат может выглядеть неповрежденным, микроскопические дефекты могут привести к поломке имплантата.
- Имплантаты Mecta-C не были оценены на предмет безопасности и совместимости в МР (магнитно-резонансной) и сканирование пациентов с имплантатами может привести к травмам пациентов.
- Имплантаты Mecta-C не были протестированы на нагрев или миграцию в среде МР или для определения спецификации для условного состояния в среде МР.
- Preoperative and operating procedures, including knowledge of the surgical techniques and correct selection and placement of the implants are important considerations in the successful utilization of the system by the surgeon. Furthermore, the proper selection and the compliance of the patient will greatly affect the results. Patients who smoke have been shown to have a reduced incidence of bone fusion. These patients should be advised of this fact and warned of this consequence. Obese, malnourished and / or alcohol / drug abuse patients and those with poor muscle and bone quality and / or nerve paralysis are also poor candidates for spinal fusion.
- Patients with previous spinal surgery at the levels to be treated may have different clinical outcomes compared to those who have not experienced previous surgery.
- The following circumstances may reduce the chance of a successful outcome: Signs of local inflammation; fever or leukocytosis; Metal/polymer sensitivity/allergies to the implant material; Grossly distorted anatomy due to congenital abnormalities; osteopenia and/or osteoporosis; unsuitable or insufficient bone support, bone immaturity.
- The Mecta-C implants should never be reimplanted. While an implant may appear undamaged, microscopic imperfections may occur and cause implant failure.
- The Mecta-C implants have not been evaluated for safety and compatibility in the MR (magnetic resonance) environment and scanning of patients who have the implant may result in patient injuries.
- The Mecta-C implants have not been tested for heating or migration in the MR environment or to determine the specifications for conditional status in the MR environment.

14.2. Заявление относительно МРТ

Неклинические испытания показали, что продукт Mecta-C является МР-совместимым (MR Conditional). Пациент с этим устройством может

14.2. MRI statement

Non-clinical testing has demonstrated the product Mecta-C is MR Conditional. A patient with this device can be safely scanned in an MR system meeting the following conditions:

проходить безопасное сканирование в режиме МРТ, отвечающей следующим условиям: - Статическое магнитное поле 3 Т. - Максимальный пространственный градиент поля 12 800 гаусс/см (128 Т/м). - Максимальный силовой продукт 216 000 000 Г2/см (216 Т2/м). - Теоретически оцененная максимальная средняя удельная скорость поглощения (SAR) всем телом < 2 Вт/кг (нормальный режим работы).	• Static magnetic field of 3 T. • Maximum spatial field gradient of 12,800 gauss/cm (128 T/m). • Maximum Force Product 216, 000,000 G2/cm (216 T2/m). • The theoretically estimated maximum whole body average specific absorption rate (SAR) of <2 W/kg (Normal Operating Mode).
15. ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ И (ИЛИ) ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЯХ В СОСТАВЕ МИ Не применимо	15. INFORMATION ABOUT MEDICINES AND (OR) PHARMACEUTICAL SUBSTANCES INCLUDED IN MD Non-applicable
16. ОПИСАНИЕ МЕТОДА СТЕРИЛИЗАЦИИ Продукция поставляется в стерильном виде. Стерилизация с использованием радиации. Процесс стерилизации пригоден для стерилизации компонентов на уровне гарантированной стерильности 10^{-6} (SAL). Валидация была проведена в соответствии со стандартом EN ISO 11135:2014 с использованием «Консервативного определения смертности в процессе стерилизации – избыточного подхода».	16. DESCRIPTION OF STERILIZATION METHOD Products are supplied sterile. Sterilized using radiation. The sterility assurance level (SAL) for the subject sterile product(s) has been established at 10^{-6} as required by EN ISO 11135: 2014.
17. ВАЛИДАЦИЯ ПРОЦЕССА УПАКОВЫВАНИЯ (ЕСЛИ МИ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СТЕРИЛЬНОМ ВИДЕ) Стерильная упаковка валидирована на сохранение безопасности и стерильности МИ при транспортировке и хранении до конца установленного срока годности.	17. PACKAGING PROCESS VALIDATION (IF MD IS SUPPLIED STERILE) Sterile packaging is validated to preserve the safety and sterility of MD during transportation and storage until the expiration date.

18. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, РАЗРАБОТКЕ И ВАЛИДАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В МИ Не применимо	18. INFORMATION ABOUT DESIGNING, ENGINEERING, AND VALIDATION OF SOFTWARE USED IN MD Non-applicable
19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МИ Не применимо	19. REQUIREMENTS FOR TECHNICAL SUPPORT AND REPAIR OF MD Not applicable

20. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УДАЛЕНИИ И ИЗВЛЕЧЕНИИ ИМПЛАНТАТОВ

Система передних шейных пластин Mecta-C

В случае репозиции костного винта удаление винта может быть выполнено с помощью трех различных процедур в зависимости от стадии фиксации винта.

Процедура 1 - Если не была выполнена процедура окончательной фиксации самофиксирующая отвертка не может быть использована, следует применить устройство для удаления винтов. Чтобы начать извлечения винта, установите дистальный наконечник винтоотвертки до упора в костный винт. Сдвиньте втулку вперед чтобы стеснить головку стопорного винта, и извлеките винт поверните против часовой стрелки, одновременно оттягивая узел "винт-винт-извлекатель".

Процедура 2 - Когда процедура окончательной фиксации завершена, необходимо использовать отвертка для окончательной блокировки с контрмоментом затяжки для откручивания предварительно установленного стопорного винта. Самоудерживающаяся отвертка затем используется для удаления костного винта.

Процедура 3 - Если углубление предварительно смонтированного стопорного винта повреждено, а окончательная затяжка завершена, необходимо использовать экстрактор стопорного винта. Вставьте экстрактор стопорного винта в шестигранное углубление стопорного винта, слегка надавите и поверните его против часовой стрелки, чтобы извлечь винт.

Система устройств для межпозвонкового соединения Mecta-C

Снова закрепите инсертер Mecta-C на имплантате и осторожно извлеките имплантат из места установки. при необходимости измените положение.

20. INFORMATION ABOUT IMPLANT REMOVAL AND EXTRACTION

The Mecta-C Anterior Cervical Plate System

In case of bone screw repositioning the Screw Removal can be performed with three different procedures depending on the stage of screw fixation.

Procedure 1 - If the final locking procedure has not been accomplished, and the Self-Retaining Screwdriver cannot be utilised, the Screw Remover should be used. To start the screw removal, position the distal tip of the Screw Remover until seated into the Bone Screw. Slide the sleeve forward to constrain the Locking Screw head and remove the screw by turning counterclockwise while pulling back the Screwto-Screw Remover assembly.

Procedure 2 - When the final locking procedure is completed the Counter Torque Final Locking Screwdriver assembly has to be used to unscrew the pre-assembled locking screw. The Self-Retaining Screwdriver has to be then used to remove the bone screw.

Procedure 3 - If the recess of the pre-assembled Locking screw is damaged and the final tightening is completed the Locking Screw Extractor must be used. Insert the Locking Screw Extractor into the hex recess of the Locking Screw applying a slight pressure and turn it counterclockwise to remove the screw.

The Mecta-C Intervertebral Fusion Device System

Re-engage the Mecta-C inserter with the implant and gently remove the implant from its site reposition as needed.

21. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Упаковки должны храниться в прохладном, сухом месте, вдали от солнечного света.

Таблица 5. Условия транспортировки:

Наименование	Диапазон
Температура	От -29 °C до +60 °C
Относительная влажность	От 30 % до 85 %
Атмосферное давление	Нет специальных требований

Таблица 6. Условия хранения:

Наименование	Диапазон
Температура	От -29 °C до +60 °C
Относительная влажность	От 30 % до 85 %
Атмосферное давление	Нет специальных требований

22. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ МИ

Изделие относится к классу Б в соответствии с классификацией медицинских отходов. После последнего использования изделие и его упаковку необходимо утилизировать в соответствии с документированными процедурами для производителя и государственными требованиями.

Незагрязненная упаковка перерабатывается как бытовые отходы.

21. CONDITIONS OF TRANSPORTATION AND STORAGE

The packages must be stored in a cool, dry place, away from sunlight.

Table 5. Transportation conditions:

Designation	Range
Temperature	-29 °C to +60 °C
Relative humidity	30 % to 85 %
Barometric pressure	No special conditions

Table 6. Storage conditions:

Designation	Range
Temperature	-29 °C to +60 °C
Relative humidity	30 % to 85 %
Barometric pressure	No special conditions

22. MD DISPOSAL RULES AND CONDITIONS

The product belongs to class B of the classification of medical waste. After last use the product and its package must be disposed of in accordance with documented procedures for manufacturer and state requirements.

Uncontaminated packaging is recycled as household waste.

23. ГАРАНТИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ

Производитель подтверждает соблюдение всех обязательных локальных требований к изделию и гарантийным обязательствам. Это включает, но не ограничивается, установленную ответственность и гарантийные обязательства в соответствии с законодательством об ответственности за качество изделий, применимом на локальном уровне.

Целесообразность использования данного медицинского изделия для какой-либо конкретной хирургической процедуры должна определяться пользователем в соответствии с инструкциями по эксплуатации производителя.

24. НАИМЕНОВАНИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И И УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ

РАЗРАБОТЧИК:

Medacta International S.A. (Медакта Интернационал С.А.)
Страда Реджина СН-6874 Кастель С. Пьетро Швейцария
+41 (91) 696 60 60
+41 (91) 696 60 66
info@medacta.ch

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Medacta International S.A. (Медакта Интернационал С.А.)
Страда Реджина СН-6874 Кастель С. Пьетро Швейцария
+41 (91) 696 60 60
+41 (91) 696 60 66
info@medacta.ch

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:

Medacta International S.A. (Медакта Интернационал С.А.)
Страда Реджина
СН-6874 Кастель С. Пьетро
Швейцария

Medacta International S.A. (Медакта Интернационал С.А.)
Виа Алла Росса
СН-6862 Ранкате

23. WARRANTY

Manufacturer confirms the compliance with all mandatory local product liability and warranty obligations. This includes but is not limited to the mandatory liability and warranty obligations under the product liability act applicable at local level.

Suitability for use of this medical device for any particular surgical procedure should be determined by the user in conformance with the manufacturer's instructions for use.

24. NAME AND LEGAL ADDRESS OF MANUFACTURER AND AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN RUSSIAN FEDERATION

DEVELOPER:

MEDACTA INTERNATIONAL S.A.
Strada Regina CH-6874 Castel San Pietro, Switzerland
+41 (91) 696 60 60
+41 (91) 696 60 66
info@medacta.ch

MANUFACTURER:

MEDACTA INTERNATIONAL S.A.
Strada Regina CH-6874 Castel San Pietro, Switzerland
+41 (91) 696 60 60
+41 (91) 696 60 66
info@medacta.ch

PLACE OF PRODUCTION:

MEDACTA INTERNATIONAL S.A.
Strada Regina
CH-6874 Castel San Pietro
Switzerland

MEDACTA INTERNATIONAL S.A.
Via Alla Rossa
CH-6862 Rancate

Швейцария УПОЛНОМОЧЕННОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РОССИИ: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный центр медицинских проектов (ООО «СЦМП») 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, Дербеневская наб., д. 7, стр. 9, помещ. I, ком. 9 +7(495)106 16 36 contact@regmt.ru	Switzerland AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER IN RUSSIA: LLC SPECIALIZED CENTER FOR MEDICAL PROJECTS 115114, Moscow, vn.ter.g. municipal district Danilovsky, Derbenevskaya nab., 2 7, building 9, prem. i, com. 9 +7(495)106 16 36 contact@regmt.ru
--	---

Технические характеристики МИ / Technical characteristics of MD

В таблицах технических характеристик указаны фактические параметры МИ, такие как длина, ширина, высота изделия, его масса и шероховатость. Для изделий, которые были произведены и собраны из нескольких частей, габаритные размеры указаны для основной части.

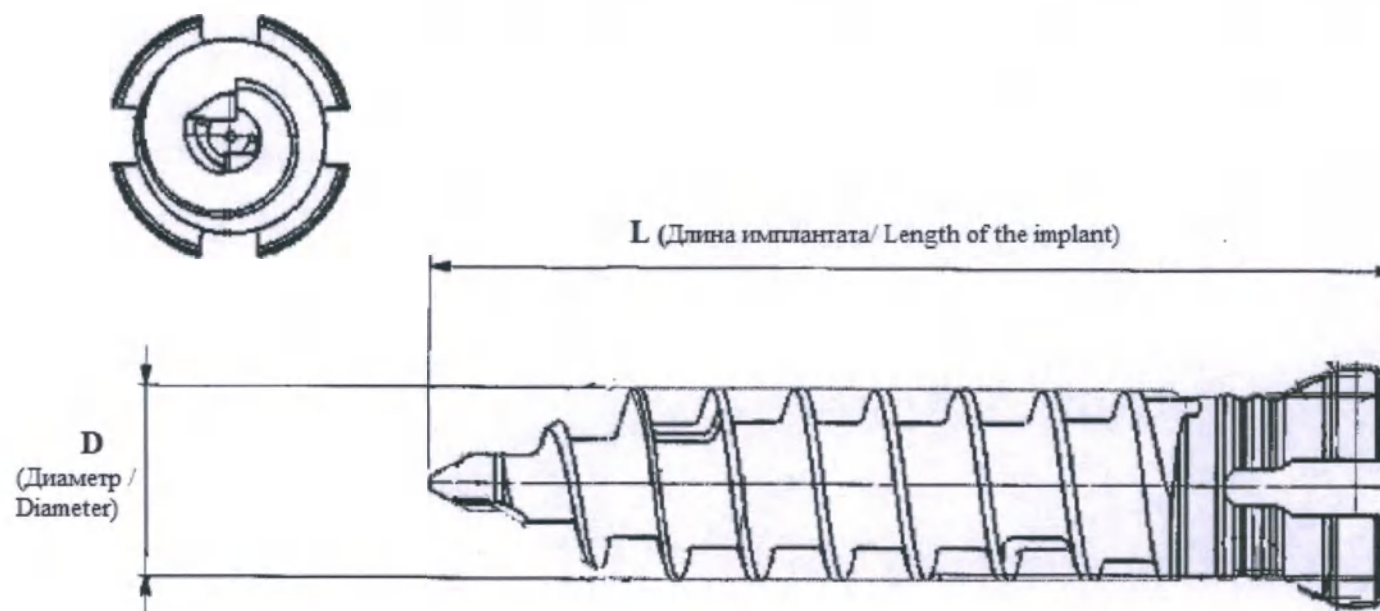


Рис.1 Имплантаты Места-С Винт шейный самосверлящий (не более 4 шт./уп.), варианты исполнения: Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм; Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 13мм; Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм; Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 15 мм; Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм; Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 17мм; Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм; Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 19мм; Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 20мм; Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 21мм; Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм;

Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 12мм; Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 13мм; Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 14мм; Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 15мм; Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 16мм; Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 17мм; Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 18мм; Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 19мм; Винт костный шейный,

самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 20мм; Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 21мм; Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 22мм;

Fig.1 Implants Mecta-C Variable self-drilling screw (no more than 4 pcs./pack.), versions: Variable self-drilling screw diam. 4x12mm; Variable self-drilling screw diam. 4x13mm; Variable self-drilling screw diam. 4x14mm; Variable self-drilling screw diam. 4x15mm; Variable self-drilling screw diam. 4x16mm; Variable self-drilling screw diam. 4x17mm; Variable self-drilling screw diam. 4x18mm; Variable self-drilling screw diam. 4x19mm; Variable self-drilling screw diam. 4x20mm; Variable self-drilling screw diam. 4x21mm; Variable self-drilling screw diam. 4x22mm;

Fixed self-drilling screw (no more than 4 pcs./pack.), versions: Fixed self-drilling screw diam. 4x12mm; Fixed self-drilling screw diam. 4x13mm; Fixed self-drilling screw diam. 4x14mm; Fixed self-drilling screw diam. 4x15mm; Fixed self-drilling screw diam. 4x16mm; Fixed self-drilling screw diam. 4x17mm; Fixed self-drilling screw diam. 4x18mm; Fixed self-drilling screw diam. 4x19mm; Fixed self-drilling screw diam. 4x20mm; Fixed self-drilling screw diam. 4x21mm; Fixed self-drilling screw diam. 4x22mm;

Таблица 1. Технические характеристики / Table 1. Technical characteristics

Наименование изделия	Диаметр имплантата D с допусками (мм)	Длина имплантата L с допусками (мм)	Шероховатость Ra, не более (мкм)	Масса имплантата с допусками (г)
Name of MD	Diameter of the implant D with tolerances (mm)	Length of the implant L with tolerances (mm)	Roughness Ra, no more than (μm)	Mass of the implant with tolerances (g)
Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм Variable self-drilling screw diam. 4x12mm	4±0,05	$12_{-0,30}^0$	1,6	0,58±5%
Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 13мм Variable self-drilling screw diam. 4x13mm		$13_{-0,30}^0$	1,6	0,59±5%
Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм Variable self-drilling screw diam. 4x14mm		$14_{-0,30}^0$	1,6	0,60±5%
Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 15 мм Variable self-drilling screw diam. 4x15mm		$15_{-0,30}^0$	1,6	0,61±5%
Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм		$16_{-0,30}^0$	1,6	

Variable self-drilling screw diam. 4x16mm				0,62±5%
Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 17мм		$17_{-0,30}^0$	1,6	0,63±5%
Variable self-drilling screw diam. 4x17mm				
Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм		$18_{-0,30}^0$	1,6	0,64±5%
Variable self-drilling screw diam. 4x18mm				
Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 19мм		$19_{-0,30}^0$	1,6	0,65±5%
Variable self-drilling screw diam. 4x19mm				
Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 20мм		$20_{-0,30}^0$	1,6	0,66±5%
Variable self-drilling screw diam. 4x20mm				
Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 21мм		$21_{-0,30}^0$	1,6	0,67±5%
Variable self-drilling screw diam. 4x21mm				
Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм		$22_{-0,30}^0$	1,6	0,68±5%
Variable self-drilling screw diam. 4x22mm				
Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 12мм		$12_{-0,30}^0$	1,6	0,58±5%
Fixed self-drilling screw diam. 4x12mm	4±0,05			

Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 13мм Fixed self-drilling screw diam. 4x13mm		$13_{-0,30}^0$	1,6	0,59±5%
Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 14мм Fixed self-drilling screw diam. 4x14mm		$14_{-0,30}^0$	1,6	0,60±5%
Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 15мм Fixed self-drilling screw diam. 4x15mm		$15_{-0,30}^0$	1,6	0,61±5%
Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 16мм Fixed self-drilling screw diam. 4x16mm		$16_{-0,30}^0$	1,6	0,62±5%
Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 17мм Fixed self-drilling screw diam. 4x17mm		$17_{-0,30}^0$	1,6	0,63±5%
Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 18мм Fixed self-drilling screw diam. 4x18mm		$18_{-0,30}^0$	1,6	0,64±5%
Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 19мм Fixed self-drilling screw diam. 4x19mm		$19_{-0,30}^0$	1,6	0,65±5%
Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 20мм Fixed self-drilling screw diam. 4x20mm		$20_{-0,30}^0$	1,6	0,66±5%

Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 21мм Fixed self-drilling screw diam. 4x21mm		$21_{-0,30}^0$	1,6	$0,67 \pm 5\%$
Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 22мм Fixed self-drilling screw diam. 4x22mm		$22_{-0,30}^0$	1,6	$0,68 \pm 5\%$

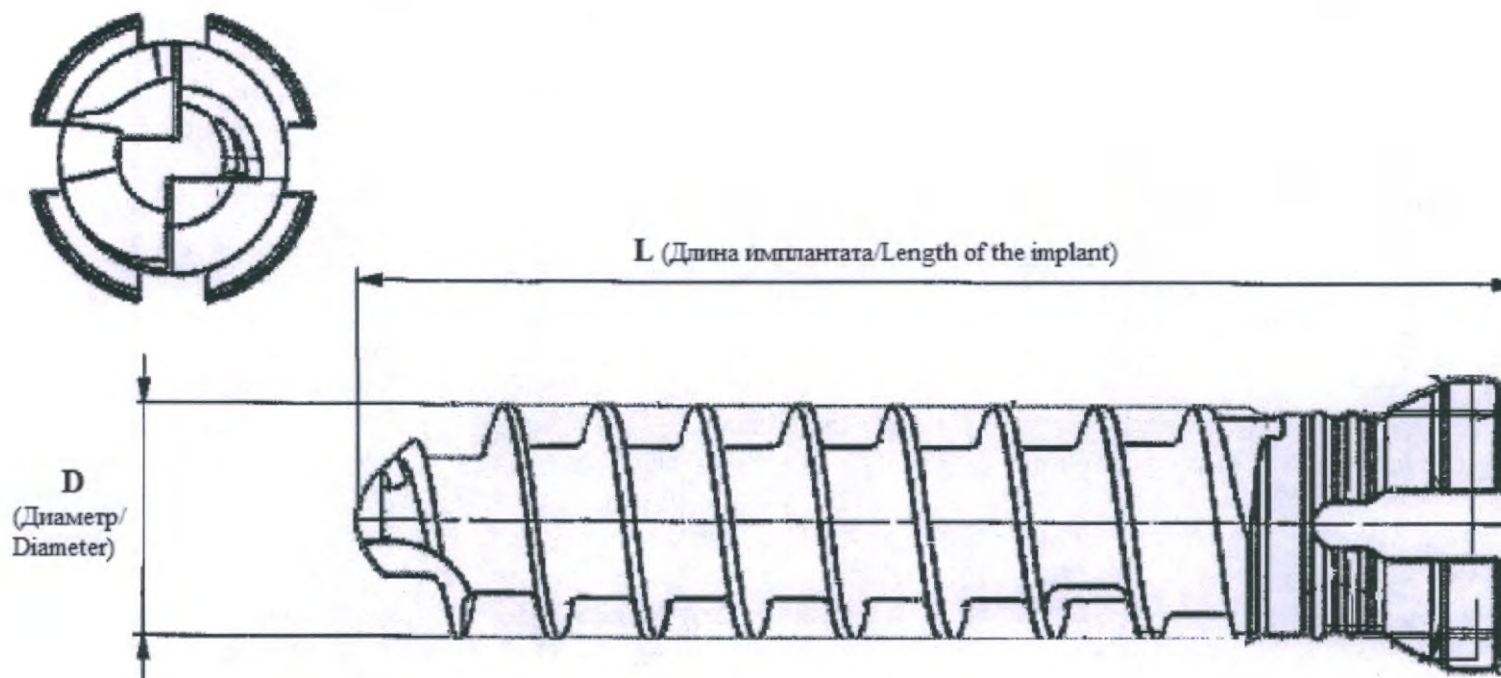


Рис.2 Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.) варианты исполнения, варианты исполнения: Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм; Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 13мм; Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм; Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 15мм; Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм; Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 17мм; Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм; Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм,

длина 19мм; Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 20мм; Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 21мм; Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм; Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.) варианты исполнения: Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 13мм; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 15мм; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 17мм; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 19мм; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 20мм; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 21мм; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм;

Fig.2 Implants Mecta-C Variable self-tapping screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack), versions: Variable self-tapping screw diam. 4x12mm; Variable self-tapping screw diam. 4x13mm; Variable self-tapping screw diam. 4x14mm; Variable self-tapping screw diam. 4x15mm; Variable self-tapping screw diam. 4x16mm; Variable self-tapping screw diam. 4x17mm; Variable self-tapping screw diam. 4x18mm; Variable self-tapping screw diam. 4x19mm; Variable self-tapping screw diam. 4x20mm; Variable self-tapping screw diam. 4x21mm; Variable self-tapping screw diam. 4x22mm; Fixed self-tapping screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack), versions: Fixed self-tapping screw diam. 4x12mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x13mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x14mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x15mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x16mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x17mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x18mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x19mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x20mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x21mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x22mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x12mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x13mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x14mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x15mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x16mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x17mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x18mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x19mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x20mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x21mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x22mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x12mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x13mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x14mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x15mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x16mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x17mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x18mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x19mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x20mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x21mm; Fixed self-tapping screw diam. 4x22mm;

Таблица 2. Технические характеристики / Table 2. Technical characteristics

Наименование изделия	Диаметр имплантата D с допусками (мм)	Длина имплантата L с допусками (мм)	Шероховатость Ra, не более (мкм)	Масса имплантата с допусками (г)
Name of MD	Diameter of the implant D with tolerances (mm)	Length of the implant L with tolerances (mm)	Roughness Ra, no more than (μm)	Mass of the implant with tolerances (g)
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм Variable self-tapping screw diam. 4x12mm	4±0.05	12 ⁰ _{-0,30}	1,6	0,65±5%
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 13мм		13 ⁰ _{-0,30}	1,6	0,66±5%

Variable self-tapping screw diam. 4x13mm			
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм		14 ⁰ _{-0,30}	1,6
Variable self-tapping screw diam. 4x14mm			0,67±5%
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 15мм		15 ⁰ _{-0,30}	1,6
Variable self-tapping screw diam. 4x15mm			0,68±5%
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм		16 ⁰ _{-0,30}	1,6
Variable self-tapping screw diam. 4x16mm			0,69±5%
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 17мм		17 ⁰ _{-0,30}	1,6
Variable self-tapping screw diam. 4x17mm			0,70±5%
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм		18 ⁰ _{-0,30}	1,6
Variable self-tapping screw diam. 4x18mm			0,71±5%
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 19мм		19 ⁰ _{-0,30}	1,6
Variable self-tapping screw diam. 4x19mm			0,72±5%
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 20мм		20 ⁰ _{-0,30}	1,6
Variable self-tapping screw diam. 4x20mm			0,73±5%
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 21мм		21 ⁰ _{-0,30}	1,6
Variable self-tapping screw diam. 4x21mm			0,74±5%
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм		22 ⁰ _{-0,30}	1,6
Variable self-tapping screw diam. 4x22mm			0,75±5%
Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол,		12 ⁰ _{-0,30}	1,6
			0,63±5%

Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 22мм			$22_{-0,30}^0$	1,6	$0,73 \pm 5\%$
Fixed self-tapping screw diam. 4x22mm					

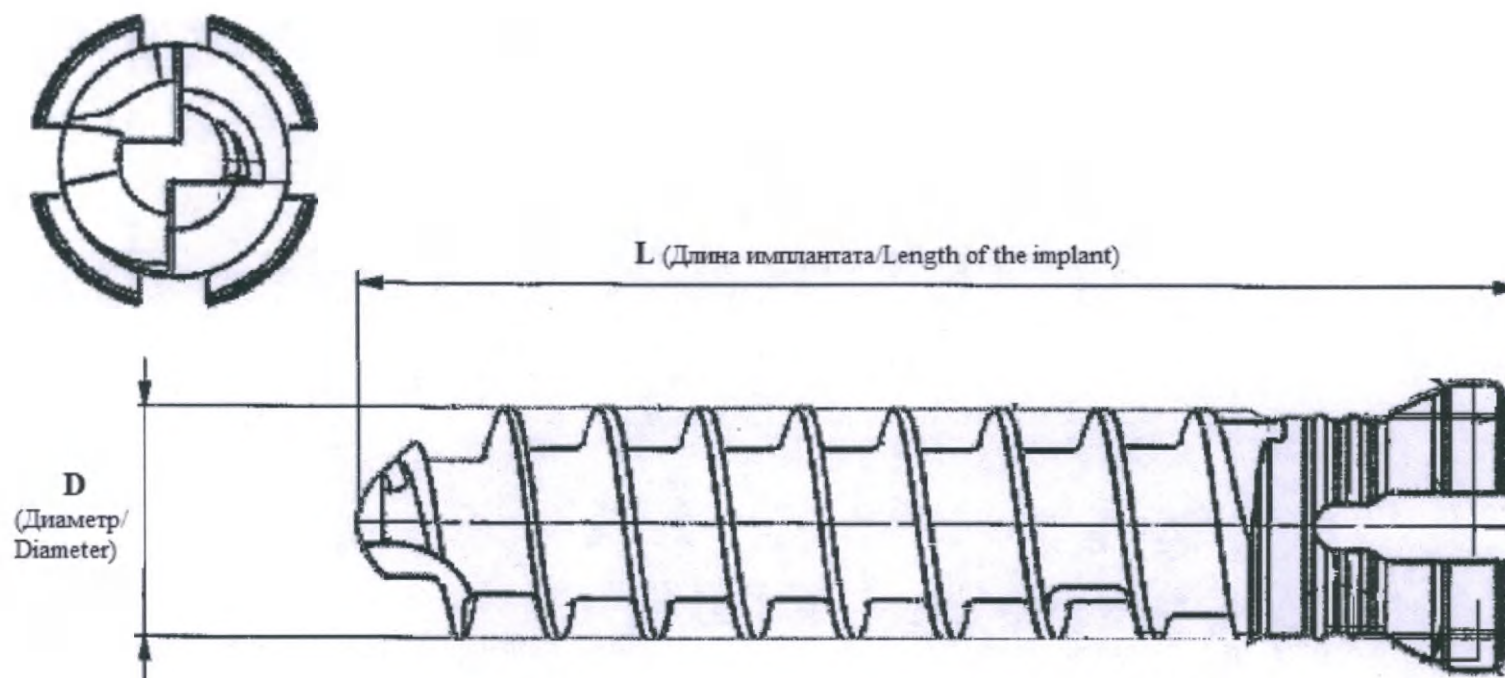


Рис.3 Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.) варианты исполнения: Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 12мм; Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 14мм; Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 16мм; Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 18мм; Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 20мм; Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22мм;

2.1. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.) варианты исполнения: Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 20мм; Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22мм;

Fig.3 Implants Mecta-C Variable self-tapping screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack), versions: Variable self-tapping screw diam. 4.5x12mm; Variable self-tapping screw diam. 4.5x14mm; Variable self-tapping screw diam. 4.5x16mm; Variable self-tapping screw diam. 4.5x18mm; Variable self-tapping screw diam. 4.5x20mm; Variable self-tapping screw diam. 4.5x22mm;
Fixed self-tapping screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack), versions: Fixed self-tapping screw diam. 4.5x12mm; Fixed self-tapping screw diam. 4.5x14mm; Fixed self-tapping screw diam. 4.5x16mm; Fixed self-tapping screw diam. 4.5x18mm; Fixed self-tapping screw diam. 4.5x20mm; Fixed self-tapping screw diam. 4.5x22mm;

Таблица 3. Технические характеристики / Table 3. Technical characteristics

Наименование изделия	Диаметр имплантата D с допусками (мм)	Длина имплантата L с допусками (мм)	Шероховатость Ra, не более (мкм)	Масса имплантата с допусками (г)
Name of MD	Diameter of the implant D with tolerances (mm)	Length of the implant L with tolerances (mm)	Roughness Ra, no more than (μm)	Mass of the implant with tolerances (g)
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 12мм Variable self-tapping screw diam. 4.5x12mm	4,5±0,05	12 ⁰ _{-0,30}	1,6	0,77±5%
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 14мм Variable self-tapping screw diam. 4.5x14mm		14 ⁰ _{-0,30}		0,78±5%
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 16мм Variable self-tapping screw diam. 4.5x16mm		16 ⁰ _{-0,30}		0,79±5%
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 18мм Variable self-tapping screw diam. 4.5x18mm		18 ⁰ _{-0,30}		0,80±5%
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 20мм Variable self-tapping screw diam. 4.5x20mm		20 ⁰ _{-0,30}		0,81±5%
Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22мм Variable self-tapping screw diam. 4.5x22mm		22 ⁰ _{-0,30}		0,82±5%

Variable self-tapping screw diam. 4.5x22mm			
Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 12мм		$12_{-0,30}^0$	0,78±5%
Fixed self-tapping screw diam. 4.5x12mm			
Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 14мм		$14_{-0,30}^0$	0,79±5%
Fixed self-tapping screw diam. 4.5x14mm			
Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 16мм		$16_{-0,30}^0$	0,80±5%
Fixed self-tapping screw diam. 4.5x16mm			
Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 18мм		$18_{-0,30}^0$	0,81±5%
Fixed self-tapping screw diam. 4.5x18mm			
Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 20мм		$20_{-0,30}^0$	0,82±5%
Fixed self-tapping screw diam. 4.5x20mm			
Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22мм		$22_{-0,30}^0$	0,83±5%
Fixed self-tapping screw diam. 4.5x22mm			

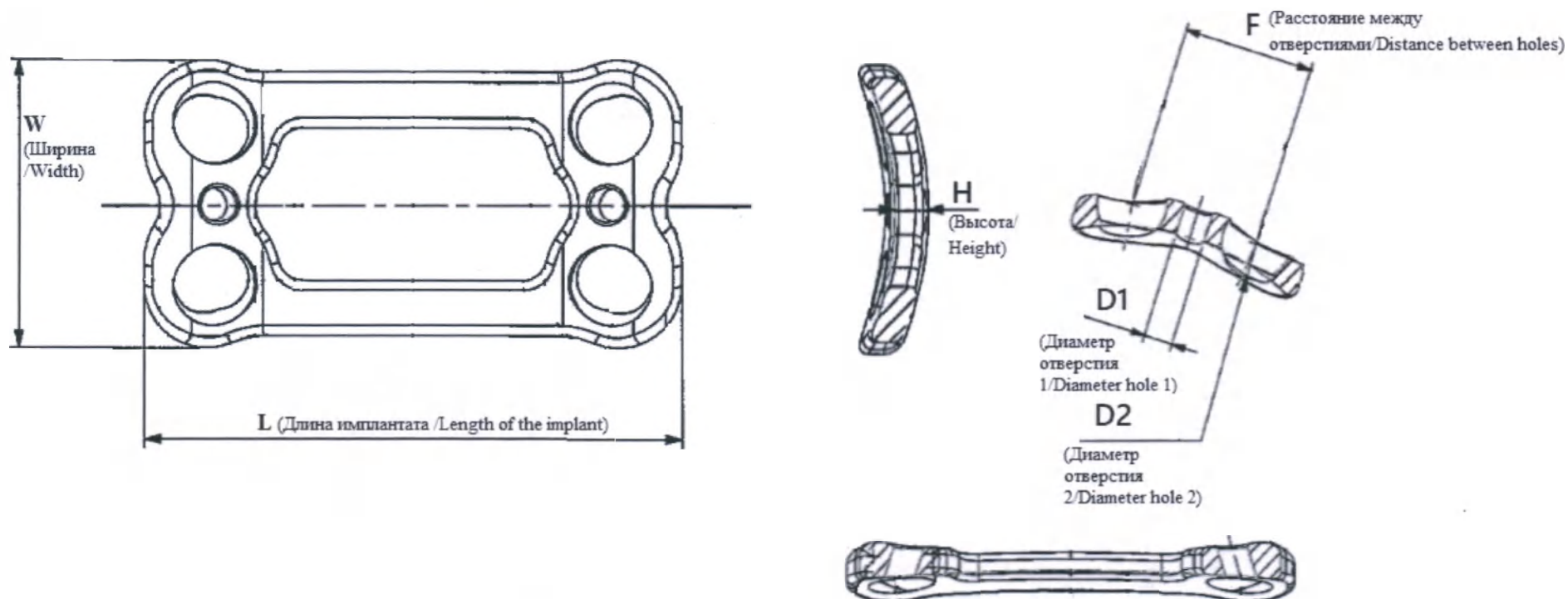


Рис.4 Имплантаты Места-С Пластина шейная одноуровневая 20мм; Пластина шейная одноуровневая 22мм; Пластина шейная одноуровневая 24мм; Пластина шейная одноуровневая 26мм; Пластина шейная одноуровневая 28мм; Пластина шейная одноуровневая 30мм; Пластина шейная одноуровневая 32мм; Пластина шейная одноуровневая 34мм

Fig.4 Implants Mesta-C Cervical Plate L1x20mm; Cervical Plate L1x22mm; Cervical Plate L1x24mm; Cervical Plate L1x26mm; Cervical Plate L1x28mm; Cervical Plate L1x30mm; Cervical Plate L1x32mm; Cervical Plate L1x34mm

Таблица 4. Технические характеристики / Table 4. Technical characteristics

Наименование изделия	Длина имплантата L с допусками (мм)	Ширина имплантата W с допусками (мм)	Высота имплантата H с допусками (мм)	Диаметр отверстия имплантата D1 с допусками (мм)	Диаметр отверстия имплантата D2 с допусками (мм)	Расстояние между отверстиями имплантата F с допусками (мм)	Количество отверстий	Шероховатость Ra, не более (мкм)	Масса имплантата с допусками (г)
Name of MD	Length of the implant L with tolerances (mm)	Width of the implant W with tolerances (mm)	Height of the implant H with tolerances (mm)	Diameter of the implant D1 with tolerances (mm)	Diameter of the implant D2 with tolerances (mm)	Distance between holes of the implant F with tolerances (mm)	Number of holes	Roughness Ra, no more than (μm)	Mass of the implant with tolerances (g)

Пластина шейная одноуровневая 20мм	20±0,20	18±0,10	2±0,05	2.20±0,05	5.30 ^{+0.05} ₀	9.90±0,20	6	1,6	2,04±5%
Cervical Plate L1x20mm									2,14±5%
Пластина шейная одноуровневая 22мм	22±0,20								2,24±5%
Cervical Plate L1x22mm									2,34±5%
Пластина шейная одноуровневая 24мм	24±0,20								2,44±5%
Cervical Plate L1x24mm									2,54±5%
Пластина шейная одноуровневая 26мм	26±0,20								2,64±5%
Cervical Plate L1x26mm									2,74±5%
Пластина шейная одноуровневая 28мм	28±0,20								
Cervical Plate L1x28mm									
Пластина шейная одноуровневая 30мм	30±0,20								
Cervical Plate L1x30mm									
Пластина шейная одноуровневая 32мм	32±0,20								
Cervical Plate L1x32mm									
Пластина шейная одноуровневая 34мм	34±0,20								
Cervical Plate L1x34mm									

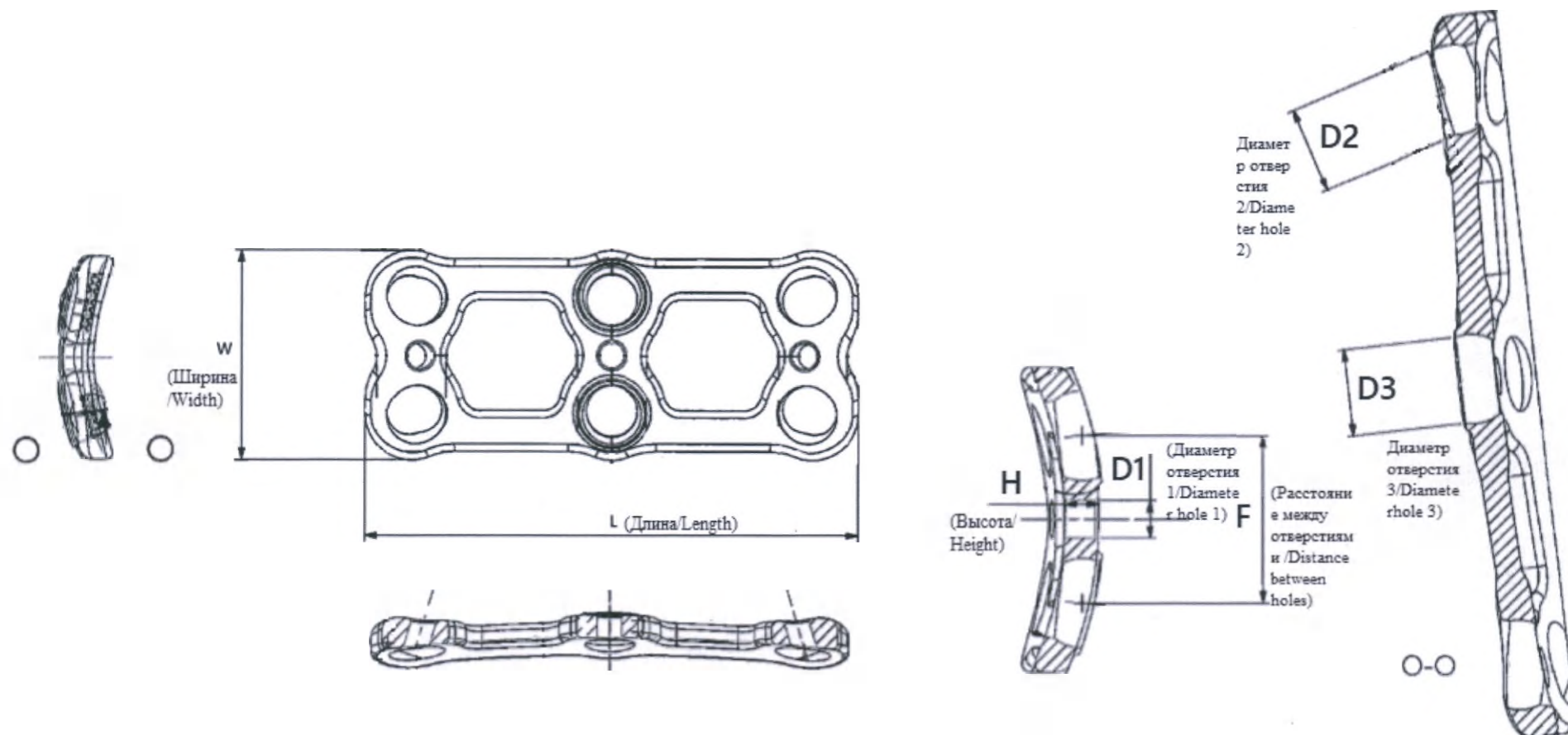


Рис.5 Имплантаты Мекта-С Пластина шейная двухуровневая 34мм; Пластина шейная двухуровневая 37мм; Пластина шейная двухуровневая 40мм; Пластина шейная двухуровневая 43мм; Пластина шейная двухуровневая 46мм; Пластина шейная двухуровневая 49мм; Пластина шейная двухуровневая 52мм Пластина шейная двухуровневая 34мм

Fig.5 Implants Mecta-C Cervical Plate L2x34mm; Cervical Plate L2x37mm; Cervical Plate L2x40mm; Cervical Plate L2x43mm; Cervical Plate L2x46mm; Cervical Plate L2x49mm; Cervical Plate L2x52mm; Cervical Plate L2x34mm

Таблица 5. Технические характеристики / Table 5. Technical characteristics

Наименование изделия	Длина имплантата L с допусками (мм)	Ширина имплантата W с допусками (мм)	Высота имплантата H с допусками (мм)	Диаметр отверстия имплантата D1 с допусками (мм)	Диаметр отверстия имплантата D2 с допусками (мм)	Диаметр отверстия имплантата D3 с допусками (мм)	Расстояние между отверстиями имплантата F с допусками (мм)	Количество отверстий	Шероховатость Ra, не более (мкм)	Масса имплантата с допусками (г)
----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------------------	----------------------------------

Name of MD	Length of the implant L with tolerances (mm)	Width of the implant W with tolerances (mm)	Thickness of the implant with tolerances (mm)	Diameter of the implant D1 with tolerances (mm)	Diameter of the implant D2 with tolerances (mm)	Diameter of the implant D3 with tolerances (mm)	Distance between holes of the implant F with tolerances (mm)	Number of holes	Roughness Ra, no more than (μm)	Mass of the implant with tolerances (g)
Пластина шейная двухуровневая 34мм Cervical Plate L2x34mm	34±0,20	18±0,10	2±0,05	2.20±0,05	5.10 ^{+0.06} _{-0.02}	5.12 ^{+0.04} _{-0.04}	9.90±0,20	9	1,6	3,97±5%
Пластина шейная двухуровневая 37мм Cervical Plate L2x37mm	37±0,20									4±5%
Пластина шейная двухуровневая 40мм Cervical Plate L2x40mm	40±0,20									4,07±5%
Пластина шейная двухуровневая 43мм Cervical Plate L2x43mm	43±0,20									4,1±5%
Пластина шейная двухуровневая 46мм Cervical Plate L2x46mm	46±0,20									4,17±5%

Cervical Plate L2x46mm										
Пластина шейная двухуровневая 49мм	49±0,20									4,2±5%
Cervical Plate L2x49mm										
Пластина шейная двухуровневая 52мм	52±0,20									4,27±5%
Cervical Plate L2x52mm										

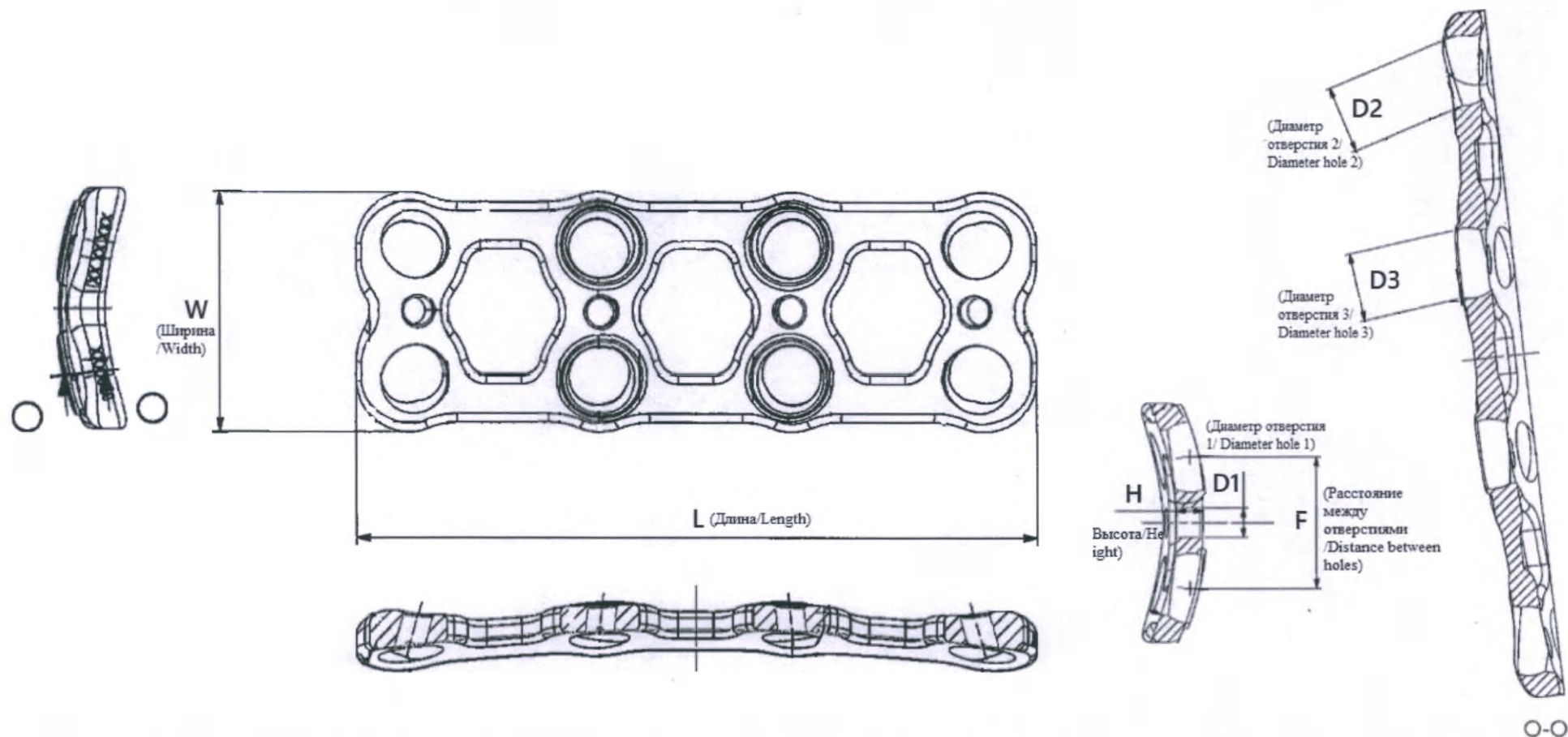


Рис.6 Имплантаты Мекта-С Пластина шейная трехуровневая 52мм; Пластина шейная трехуровневая 55мм; Пластина шейная трехуровневая 58мм; Пластина шейная трехуровневая 61мм; Пластина шейная трехуровневая 64мм; Пластина шейная трехуровневая 67мм; Пластина шейная трехуровневая 70мм; Пластина шейная трехуровневая 73мм; Пластина шейная трехуровневая 76мм

Fig.6 Implants Mecta-C Cervical Plate L3x52mm; Cervical Plate L3x55mm; Cervical Plate L3x58mm; Cervical Plate L3x61mm; Cervical Plate L3x64mm; Cervical Plate L3x67mm; Cervical Plate L3x70mm; Cervical Plate L3x73mm; Cervical Plate L3x76mm

Таблица 6. Технические характеристики / Table 6. Technical characteristics

Наименование изделия	Длина имплантата L с допусками (мм)	Ширина имплантата W с допусками (мм)	Высота имплантата H с допусками (мм)	Диаметр отверстия имплантата D1 с допусками (мм)	Диаметр отверстия имплантата D2 с допусками (мм)	Диаметр отверстия имплантата D3 с допусками (мм)	Расстояние между отверстиями имплантата F с допусками (мм)	Количество отверстий	Шероховатость Ra, не более (мкм)	Масса имплантата с допусками (г)
----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------------------	----------------------------------

Name of MD	Length of the implant with tolerances (mm)	Width of the implant with tolerances (mm)	Height of the implant with tolerances (mm)	Diameter of the implant D1 with tolerances (mm)	Diameter of the implant D2 with tolerances (mm)	Diameter of the implant D3 with tolerances (mm)	Distance between holes of the implant F with tolerances (mm)	Number of holes	Roughness Ra, no more than (μm)	Mass of the implant with tolerances (g)
Пластина шейная трехуровневая 52мм Cervical Plate L3x52mm	52±0,20	18±0,10	2±0,05	2.20±0.05	5.09 ^{+0.07} _{-0.01}	5.10 ^{+0.06} _{-0.02}	9.90±0,20	12	1,6	5,74±5%
Пластина шейная трехуровневая 55мм Cervical Plate L3x55mm	55±0,20									5,84±5%
Пластина шейная трехуровневая 58мм Cervical Plate L3x58mm	58±0,20									5,94±5%
Пластина шейная трехуровневая 61мм Cervical Plate L3x61mm	61±0,20									6,04±5%
Пластина шейная трехуровневая 64мм Cervical Plate L3x64mm	64±0,20									6,14±5%

Cervical Plate L3x64mm										
Пластина шейная трехуровневая 67мм	67±0,20									6,24±5%
Cervical Plate L3x67mm										
Пластина шейная трехуровневая 70мм	70±0,20									6,34±5%
Cervical Plate L3x70mm										
Пластина шейная трехуровневая 73мм	73±0,20									6,44±5%
Cervical Plate L3x73mm										
Пластина шейная трехуровневая 76мм Cervical Plate L3x76mm	76±0,20									6,54±5%

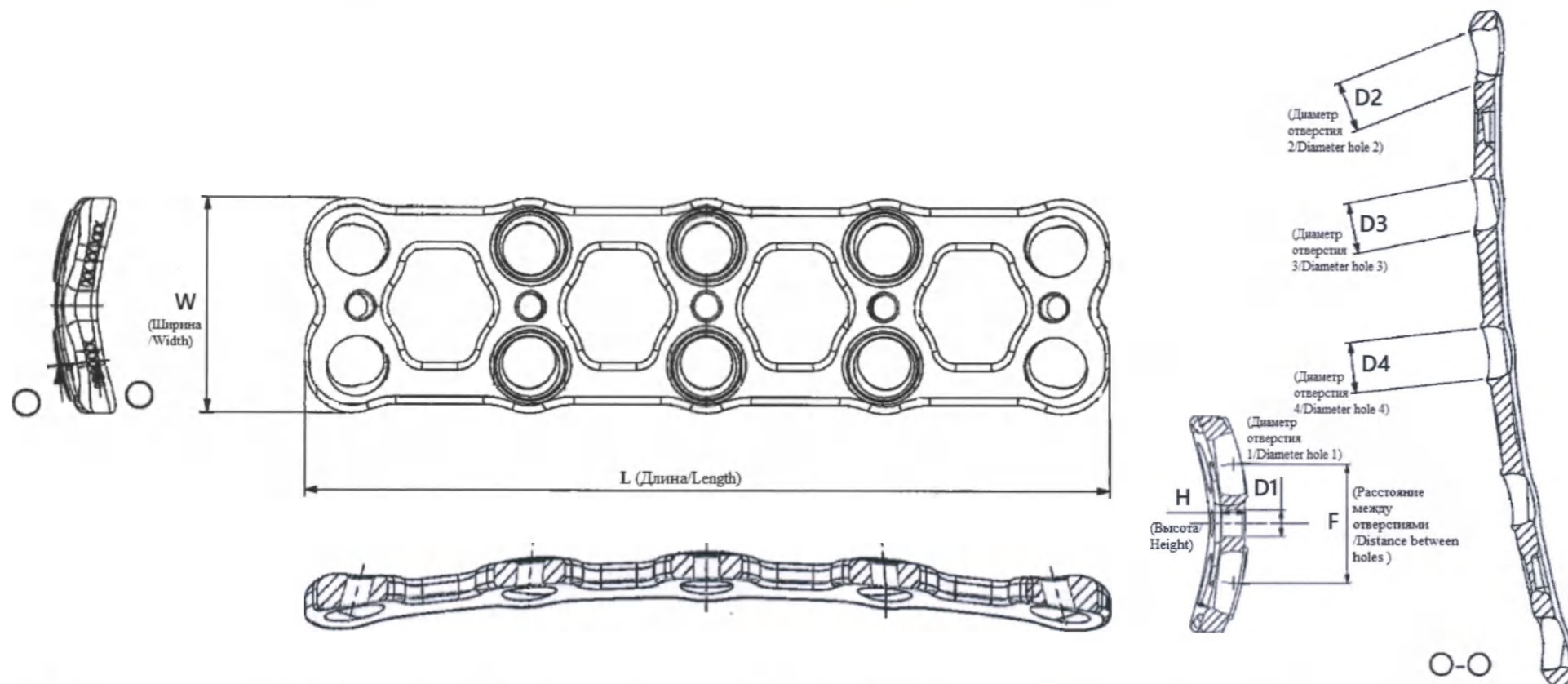


Рис.7 Имплантаты Места-С Пластина шейная четырехуровневая 68мм; Пластина шейная четырехуровневая 72мм; Пластина шейная четырехуровневая 76мм; Пластина шейная четырехуровневая 80мм; Пластина шейная четырехуровневая 84мм; Пластина шейная четырехуровневая 88мм; Пластина шейная четырехуровневая 92мм

Fig.7 Implants Mesta-C Cervical Plate L4x68mm; Cervical Plate L4x72mm; Cervical Plate L4x76mm; Cervical Plate L4x80mm; Cervical Plate L4x84mm; Cervical Plate L4x88mm; Cervical Plate L4x92mm

Таблица 7. Технические характеристики / Table 7. Technical characteristics

Наименование изделия	Длина имплантата L с допусками (мм)	Ширина имплантата W с допусками (мм)	Высота имплантата H с допусками (мм)	Диаметр отверстия имплантата D1 с допусками (мм)	Диаметр отверстия имплантата D2 с допусками (мм)	Диаметр отверстия имплантата D3 с допусками (мм)	Диаметр отверстия имплантата D4 с допусками (мм)	Расстояние между отверстиями имплантата F с допусками (мм)	Количество отверстий	Шероховатость Ra, не более (мкм)	Масса имплантата с допусками (г)
Name of MD	Length of the implant with	Width of the implant with	Height of the implant with	Diameter of the implant D1 with	Diameter of the implant D2 with	Diameter of the implant D3 with	Diameter of the implant D4 with	Distance between holes of the implant	Number of	Roughness Ra, no	Mass of the implant

	tolerances (mm)	tolerances (mm)	tolerance (mm)	tolerances (mm)	tolerances (mm)	tolerances (mm)	tolerances (mm)	F with tolerances (mm)	hole s	more than (μm)	with tolerance s (g)
Пластина шейная четырёхур овневая 68мм Cervical Plate L4x68mm	68±0,20	18±0,10	2±0,05	2.20±0.05	5.08 ^{+0.08} ₀	5.10 ^{+0.06} _{-0.02}	5.11 ^{+0.05} _{-0.03}	9.90±0,20	15	1,6	7,1±5%
Пластина шейная четырёхур овневая 72мм Cervical Plate L4x72mm	72±0,20										7,2±5%
Пластина шейная четырёхур овневая 76мм Cervical Plate L4x76mm	76±0,20										7,3±5%
Пластина шейная четырёхур овневая 80мм	80±0,20										7,4±5%

Cervical Plate L4x80mm											
Пластина шейная четырёхур овневая 84мм	84±0,20										7,5±5%
Cervical Plate L4x84mm											
Пластина шейная четырёхур овневая 88мм	88±0,20										7,6±5%
Cervical Plate L4x88mm											
Пластина шейная четырёхур овневая 92мм	92±0,20										7,7±5%
Cervical Plate L4x92mm											

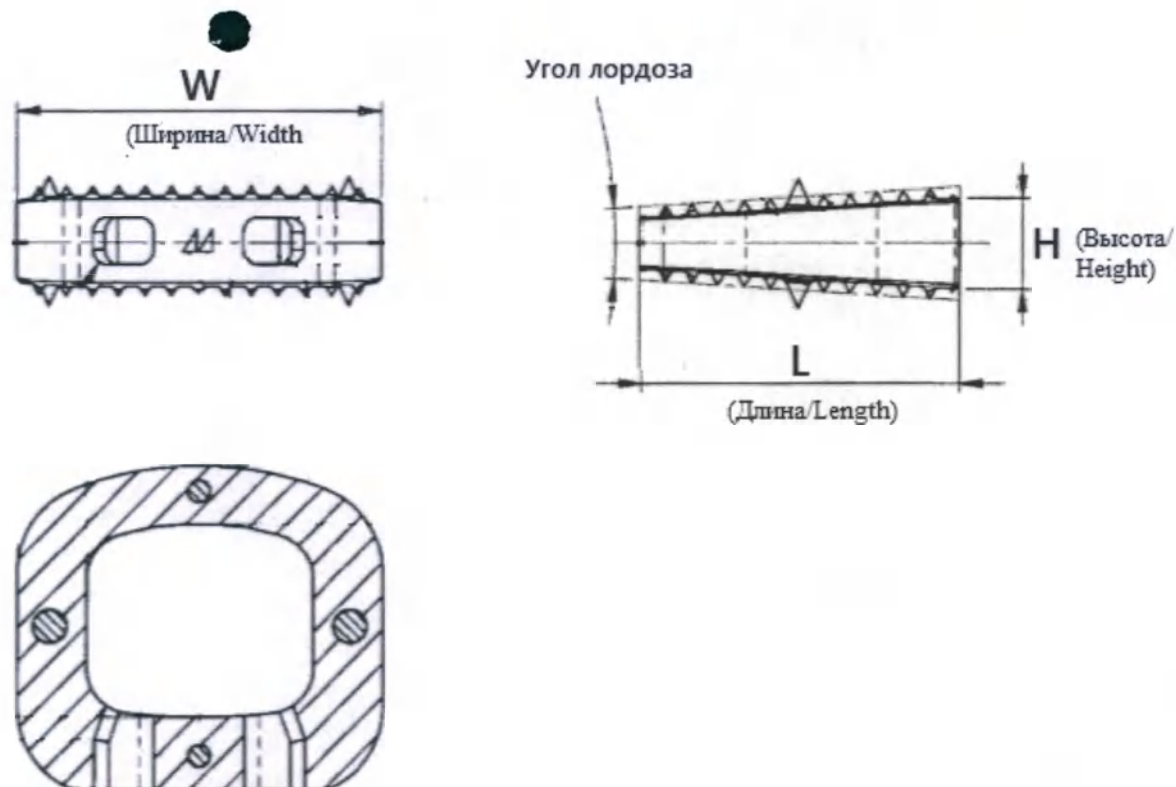


Рис.8 Имплантаты Места-С Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x4; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x5; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x6; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x7; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x8; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x9; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x4; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x5; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x6; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x7; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x8; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x9; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x4; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x5; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x6; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x7; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x8; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x9; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x4; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x5; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x6; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x7; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x8; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x9; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x4; Кейдж межтеловой передний

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

[illegible]

Наименование изделия	Длина имплантата L с допусками (мм)	Ширина имплантата W с допусками (мм)	Высота имплантата H с допусками (мм)	Шероховатость Ra, не более (мкм)	Угол лордоза (°)	Масса имплантата с допусками (г)
Name of MD	Length of the implant with tolerances (mm)	Width of the implant with tolerances (mm)	Height of the implant with tolerances (mm)	Roughness Ra, no more than (μm)	Lordosis (°)	Mass of the implant with tolerances (g)
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x4; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x4 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x4; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x4 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x4 L7°; Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x4 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x4 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x4 L7°- Ti markers	12±0.1	14±0.1	4±0.1	1,6	7±1°	0,85±0,1
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x5; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x5 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x5; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x5 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x5 L7°; Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x5 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x5 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x5 L7°- Ti markers			5±0.1			0,86±0,1

Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x6; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x6 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x6; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x6 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x6 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x6 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x14x6 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x14x6 L7°- Ti markers			6±0.1			0,87 ±0,1
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x7; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x7 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x7; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x7 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x7 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x7 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x14x7 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x14x7 L7°- Ti markers			7±0.2			0,88±0,1
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x8; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x8 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x8 с Ti метками			8±0.2			0,89±0,1

лордоза 7° TiPEEK 12x14x8; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x8 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x8 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x8 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x14x8 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x14x8 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x9; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x14x9 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x9; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x14x9 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x9 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x9 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x14x9 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x14x9 L7°- Ti markers			9±0.2			0,9±0,1
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x4; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x4 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x4; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x4 с Ti метками	14±0.1		4±0.1			1,0±0,1

Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x4 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x4 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x14x4 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x14x4 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x5; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x5 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x5; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x5 с Ti метками			5±0.1			1,1±0,1
Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x5 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x5 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x14x5 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x14x5 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x6; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x6 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x6; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x6 с Ti метками			6±0.1			1,2±0,1
Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x6 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x6 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x14x6 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x14x6 L7°- Ti markers						

Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x6 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x7; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x7 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x7; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x7 с Ti метками			7±0.2			1,3±0,1
Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x7 L7°; Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x7 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x7 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x7 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x8; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x8 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x8; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x8 с Ti метками			8±0.2			1,4±0,1
Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x8 L7°; Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x8 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x8 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x8 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x9; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x14x9 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x9; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x9 с Ti метками			9±0.2			1,5±0,1

лордоза 7° 14x14x9 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x9; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x14x9 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x9 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x9 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x14x9 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x14x9 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x4; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x4 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x4; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x4 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x4 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x4 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x16x4 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x16x4 L7°- Ti markers	12±0.1	16±0.1	4±0.1			1,2±0,1
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x5; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x5 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x5; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x5 с Ti метками			5±0.1			1,3±0,1

Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x5 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x5 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x16x5 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x16x5 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x6; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x6 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x6; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x6 с Ti метками			6±0.1			1,37±0,1
Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x6 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x6 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x16x6 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x16x6 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x7; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x7 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x7; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x7 с Ti метками			7±0.2			1,4±0,1
Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x7 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x7 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK						

“Flat” 12x16x7 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x16x7 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x8; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x8 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x8; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x8 с Ti метками			8±0.2			1,5±0,1
Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x8 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x8 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x16x8 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x16x8 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x9; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 12x16x9 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x9; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 12x16x9 с Ti метками			9±0.2			1,6±0,1
Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x9 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x9 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x16x9 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x16x9 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x4; Кейдж	1,4±0,1		4±0.1			1,7±0,1

межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x4 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x4; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x4 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x4 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x4 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x4 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x4 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x5; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x5 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x5; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x5 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x5 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x5 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x5 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x5 L7°- Ti markers			5±0.1			1,8±0,1
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x6; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x6 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x6; Кейдж			6±0.1			1,9±0,1

межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x6 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x6 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x6 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x6 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x6 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x7; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x7 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x7; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x7 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x7 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x7 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x7 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x7 L7°- Ti markers			7±0.2			2,0±0,1
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x8; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x8 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x8; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x8 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x8 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x8 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x8 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x8 L7°- Ti markers			8±0.2			2,1±0,1

Device "Flat" 14x16x8 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x8 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x8 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x9; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 14x16x9 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x9; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 14x16x9 с Ti метками			9±0.2			2,2±0,1
Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x9 L7°; Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x9 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x9 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x16x9 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x4; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x4 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x4; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x4 с Ti метками	15±0.1	18±0.1	4±0.1			1,9±0,14
Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x4 L7°; Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x4 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x4 L7°; Cervical Interbody						

Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x4 L7°- Ti markers					
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x5; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x5 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x5; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x5 с Ti метками			5±0.1		2,0±0,14
Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x5 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x5 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x5 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x5 L7°- Ti markers					
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x6; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x6 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x6; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x6 с Ti метками			6±0.1		2,1±0,14
Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x6 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x6 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x6 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x6 L7°- Ti markers					
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x7; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x7 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x7; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x7 с Ti метками			7±0.2		2,2±0,14

лордоза 7° 15x18x7 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x7; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x7 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x7 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x7 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x7 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x7 L7°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x8; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x8 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x8; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x8 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x8 L7°; Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x8 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x8 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x8 L7°- Ti markers			8±0.2			2,3±0,14
Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x9; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° 15x18x9 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x9; Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7° TiPEEK 15x18x9 с Ti метками			9±0.2			2,4±0,14

Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x9 L7°; Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x9 L7°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x9 L7°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x9 L7°- Ti markers						
--	--	--	--	--	--	--

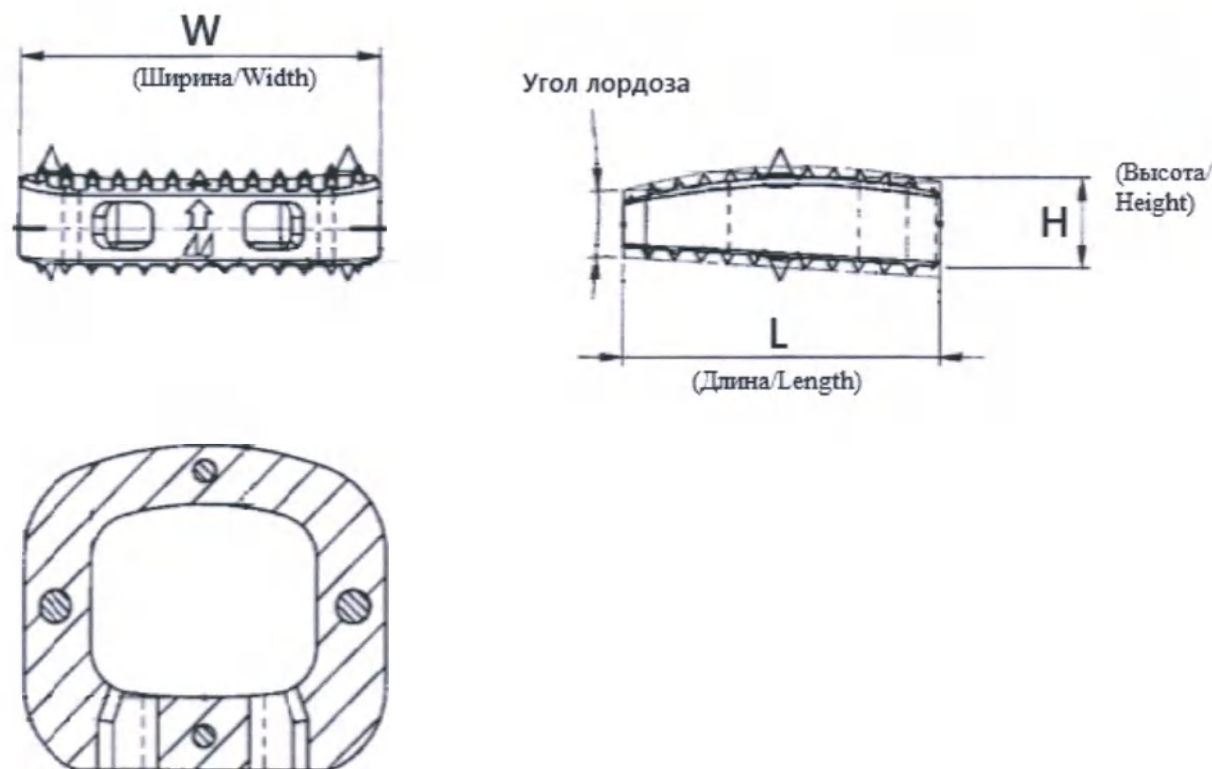


Рис.9 Имплантаты Мекта-С Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x4; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x5; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x6; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x7; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x8; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x9; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x4; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x5; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x6; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x7; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x8; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x9

000 ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

TiPEEK “Dome shaped” 12x16x4 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x16x6 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x16x4 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x16x4 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x16x4 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x16x4 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x16x5 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x16x6 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x16x7 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x16x8 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 14x16x9 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x4 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x5 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x6 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x7 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x8 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 15x18x9 L5°- Ti markers

Таблица 9. Технические характеристики / Table 9. Technical characteristics

Наименование изделия	Длина имплантата L с допусками (мм)	Ширина имплантата W с допусками (мм)	Высота имплантата H с допусками (мм)	Шероховатость Ra, не более (мкм)	Угол лордоза (°)	Масса имплантата с допусками (г)
Name of MD	Length of the implant with tolerances (mm)	Width of the implant with tolerances (mm)	Height of the implant with tolerances (mm)	Roughness Ra, no more than (μm)	Lordosis (°)	Mass of the implant with tolerances (g)
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x4; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x4 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x4; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x4 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x14x4 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x14x4 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x14x4 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x14x4 L5°- Ti markers	12±0.1	14±0.1	4±0.1	1,6	5±1°	0,85±0,1
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x5;			5±0.1			0,9±0,1

куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x5 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x5; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x5 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x14x5 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x14x5 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x14x5 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x14x5 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x6; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x6 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x6; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x6 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x14x6 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x14x6 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x14x6 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x14x6 L5°- Ti markers			6±0.1			1,0±0,1
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x7; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x7			7±0.2			1,1±0,1

с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x7; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x7 с Ti метками						
Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x14x7 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x14x7 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x14x7 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x14x7 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x8; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x8 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x8; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x8 с Ti метками			8±0.2			1,2±0,1
Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x14x8 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x14x8 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x14x8 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x14x8 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x9; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x14x9 с Ti метками; Кейдж межтеловой			9±0.2			1,3±0,1

передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x9; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x14x9 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x14x9 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x14x9 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x14x9 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x14x9 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x4; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x4 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x4; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x4 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x14x4 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x14x4 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x14x4 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x14x4 L5°- Ti markers	14±0.1		4±0.1		1,4±0,1	
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x5; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x5 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x5 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x5 с Ti метками			5±0.1		1,5±0,1	

5° TiPEEK 14x14x5; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x5 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x14x5 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x14x5 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x14x5 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x14x5 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x6; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x6 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x6; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x6 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x14x6 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x14x6 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x14x6 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x14x6 L5°- Ti markers			6±0.1			1,6±0,1
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x7; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x7 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x7; Кейдж межтеловой			7±0.2			1,7±0,1

передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x7 с Ti метками						
Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x14x7 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x14x7 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x14x7 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x14x7 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x8; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x8 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x8; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x8 с Ti метками			8±0.2			1,8±0,1
Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x14x8 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x14x8 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x14x8 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x14x8 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x9; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x14x9 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x9; Кейдж межтеловой			9±0.2			1,9±0,1

передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x14x9 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x14x9 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x14x9 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x14x9 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x14x9 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x4; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x4 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x4; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x4 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x16x4 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x16x4 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x16x4 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x16x4 L5°- Ti markers	12±0.1	16±0.1	4±0.1			1,2±0,1
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x5; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x5 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x5; Кейдж межтеловой			5±0.1			1,3±0,1

передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x5 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped” 12x16x5 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped” 12x16x5 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped” 12x16x5 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped” 12x16x5 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x6; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x6 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x6; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x6 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped” 12x16x6 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped” 12x16x6 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped” 12x16x6 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped” 12x16x6 L5°- Ti markers			6±0.1			1,41±0,1
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x7; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x7 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x7; Кейдж межтеловой			7±0.2			1,5±0,1

передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x7 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x16x7 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x16x7 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x16x7 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x16x7 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x8; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x8 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x8; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x8 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x16x8 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 12x16x8 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x16x8 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 12x16x8 L5°- Ti markers			8±0.2			1,6±0,1
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x9; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 12x16x9 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x9; Кейдж межтеловой			9±0.2			1,7±0,1

передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 12x16x9 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped” 12x16x9 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped” 12x16x9 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped” 12x16x9 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped” 12x16x9 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x4; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x4 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x4; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x4 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped” 14x16x4 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped” 14x16x4 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped” 14x16x4 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped” 14x16x4 L5°- Ti markers	14±0.1		4±0.1			1,8±0,1
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x5; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x5 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x5; Кейдж межтеловой			5±0.1			1,9±0,1

передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x5 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x16x5 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x16x5 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x16x5 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x16x5 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x6; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x6 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x6; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x6 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x16x6 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x16x6 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x16x6 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x16x6 L5°- Ti markers			6±0.1			2,0±0,1
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x7; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x7 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x7; Кейдж межтеловой			7±0.2			2,1±0,1

передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x7 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x16x7 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x16x7 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x16x7 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x16x7 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x8; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x8 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x8; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x8 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x16x8 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x16x8 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x16x8 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x16x8 L5°- Ti markers			8±0.2			2,2±0,1
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x9; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 14x16x9 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x9; Кейдж межтеловой			9±0.2			2,3±0,1

передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 14x16x9 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x16x9 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 14x16x9 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x16x9 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 14x16x9 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x4; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x4 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x4; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x4 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 15x18x4 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 15x18x4 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 15x18x4 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 15x18x4 L5°- Ti markers	15±0.1	18±0.1	4±0.1			1,9±0,1
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x5; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x5 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x5; Кейдж межтеловой			5±0.1			2,0±0,1

передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x5 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 15x18x5 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 15x18x5 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 15x18x5 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 15x18x5 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x6; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x6 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x6; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x6 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 15x18x6 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 15x18x6 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 15x18x6 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 15x18x6 L5°- Ti markers			6±0.1			2,1±0,1
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x7; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x7 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x7; Кейдж межтеловой			7±0.2			2,2±0,1

передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x7 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 15x18x7 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 15x18x7 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 15x18x7 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 15x18x7 L5°- Ti markers						
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x8; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x8 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x8; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x8 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 15x18x8 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 15x18x8 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 15x18x8 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 15x18x8 L5°- Ti markers			8±0.2			2,3±0,1
Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x9; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° 15x18x9 с Ti метками; Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x9; Кейдж межтеловой			9±0.2			2,41±0,1

передний куполовидный, угол лордоза 5° TiPEEK 15x18x9 с Ti метками Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 15x18x9 L5°; Cervical Interbody Fusion Device «Dome shaped» 15x18x9 L5°- Ti markers; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Dome shaped» 15x18x9 L5°; Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK «Flat» 15x18x9 L5°- Ti markers						
--	--	--	--	--	--	--

Система имплантатов Mecta-C для шейного отдела позвоночника, варианты исполнения:	MD name, models or variations of MD
I. Система передних шейных пластин Mecta-C, в составе: 1. Винт костный шейный, самосверлящий варианты исполнения: 1.1. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол в составе: 1.1.1. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.) варианты исполнения: 1.1.1.1. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12 мм. 1.1.1.2. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 13 мм. 1.1.1.3. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 14 мм. 1.1.1.4. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 15 мм. 1.1.1.5. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 16 мм. 1.1.1.6. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 17 мм. 1.1.1.7. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 18 мм. 1.1.1.8. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 19 мм. 1.1.1.9. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 20 мм. 1.1.1.10. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 21 мм. 1.1.1.11. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22 мм. 1.2. Стикеры для карты пациента – 6 шт. 2. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол в составе: 2.1. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.) варианты исполнения:	Mecta-C implant system for the cervical spine, design options: I. The Mecta-C Anterior Cervical Plate System, consisting of: 1. Variable self-drilling screw versions consisting of: 1. Variable self-drilling screw in the framework of: 1.1. Variable self-drilling screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack.), design versions:

шт./уп. или 4 шт./уп.) варианты исполне

- 2.1.1. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 12 мм.
- 2.1.2. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 13 мм.
- 2.1.3. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 14 мм.
- 2.1.4. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 15 мм.
- 2.1.5. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 16 мм.
- 2.1.6. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 17 мм.
- 2.1.7. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 18 мм.
- 2.1.8. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 19 мм.
- 2.1.9. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 20 мм.
- 2.1.10. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 21 мм.
- 2.1.11. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 22 мм.

2.2. Стикеры для карты пациента – 6 шт.

2. Винт костный шейный, самонарезающий варианты исполнения:

1. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол в составе:
 - 1.1. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.) варианты исполнения:
 - 1.1.1. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12 мм.
 - 1.1.2. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 13 мм.
 - 1.1.3. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 14 мм.
 - 1.1.4. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 15 мм.
 - 1.1.5. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 16 мм.

- 1.1. Variable self-drilling screw diam. 4x12mm
- 1.1.2. Variable self-drilling screw diam. 4x13mm
- 1.1.3. Variable self-drilling screw diam. 4x14mm
- 1.1.4. Variable self-drilling screw diam. 4x15mm
- 1.1.5. Variable self-drilling screw diam. 4x16mm
- 1.1.6. Variable self-drilling screw diam. 4x17mm
- 1.1.7. Variable self-drilling screw diam. 4x18mm
- 1.1.8. Variable self-drilling screw diam. 4x19mm
- 1.1.9. Variable self-drilling screw diam. 4x20mm
- 1.1.10. Variable self-drilling screw diam. 4x21mm
- 1.1.11. Variable self-drilling screw diam. 4x22mm

1.2. Patient Card Stickers - 6 pcs.

2. Variable self-tapping screw in the framework of:

2.1. Variable self-tapping screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack..) design versions:

- 2.1.1. Variable self-tapping screw diam. 4x12mm
- 2.1.2. Variable self-tapping screw diam. 4x13mm
- 2.1.3. Variable self-tapping screw diam. 4x14mm
- 2.1.4. Variable self-tapping screw diam. 4x15mm
- 2.1.5. Variable self-tapping screw diam. 4x16mm
- 2.1.6. Variable self-tapping screw diam. 4x17mm
- 2.1.7. Variable self-tapping screw diam. 4x18mm
- 2.1.8. Variable self-tapping screw diam. 4x19mm
- 2.1.9. Variable self-tapping screw diam. 4x20mm
- 2.1.10. Variable self-tapping screw diam. 4x21mm
- 2.1.11. Variable self-tapping screw diam. 4x22mm

2.2. Patient Card Stickers - 6 pcs.

2. Fixed self-drilling screw design versions:

1. Fixed self-drilling screw in the framework of:

1.1. Fixed self-drilling screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack.), versions:

- 1.1.1. Fixed self-drilling screw diam. 4x12mm
- 1.1.2. Fixed self-drilling screw diam. 4x13mm
- 1.1.3. Fixed self-drilling screw diam. 4x14mm
- 1.1.4. Fixed self-drilling screw diam. 4x15mm
- 1.1.5. Fixed self-drilling screw diam. 4x16mm
- 1.1.6. Fixed self-drilling screw diam. 4x17mm

- 1.1.6. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 17 мм.
- 1.1.7. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 18 мм.
- 1.1.8. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 19 мм.
- 1.1.9. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 20 мм.
- 1.1.10. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 21 мм.
- 1.1.11. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22 мм.
- 1.1.12. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 12 мм.
- 1.1.13. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 14 мм.
- 1.1.14. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 16 мм.
- 1.1.15. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 18 мм.
- 1.1.16. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм.
- 1.1.17. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22 мм.
- 1.2. Стикеры для карты пациента – 6 шт.
2. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол в составе:
 - 2.1. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.) варианты исполнения:
 - 2.1.1. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 12 мм.
 - 2.1.2. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 13 мм.
 - 2.1.3. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 14 мм.
 - 2.1.4. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 15 мм.
 - 2.1.5. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 16 мм.

- 1.1.7. Fixed self-drilling screw diam. 4x18mm
- 1.1.8. Fixed self-drilling screw diam. 4x19mm
- 1.1.9. Fixed self-drilling screw diam. 4x20mm
- 1.1.10. Fixed self-drilling screw diam. 4x21mm
- 1.1.11. Fixed self-drilling screw diam. 4x22mm
- 1.1.12. Fixed self-drilling screw diam. 4,5x12mm
- 1.1.13. Fixed self-drilling screw diam. 4,5x14mm
- 1.1.14. Fixed self-drilling screw diam. 4,5x16mm
- 1.1.15. Fixed self-drilling screw diam. 4,5x18mm
- 1.1.16. Fixed self-drilling screw diam. 4,5x20mm
- 1.1.17. Fixed self-drilling screw diam. 4,5x22mm
- 1.2. Patient Card Stickers - 6 pcs.

2. Fixed self-tapping screw in the framework of:
 - 2.1. Fixed self-tapping screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack.), versions:
 - 2.1.1. Fixed self-tapping screw diam. 4x12mm
 - 2.1.2. Fixed self-tapping screw diam. 4x13mm
 - 2.1.3. Fixed self-tapping screw diam. 4x14mm
 - 2.1.4. Fixed self-tapping screw diam. 4x15mm
 - 2.1.5. Fixed self-tapping screw diam. 4x16mm
 - 2.1.6. Fixed self-tapping screw diam. 4x17mm
 - 2.1.7. Fixed self-tapping screw diam. 4x18mm
 - 2.1.8. Fixed self-tapping screw diam. 4x19mm
 - 2.1.9. Fixed self-tapping screw diam. 4x20mm
 - 2.1.10. Fixed self-tapping screw diam. 4x21mm
 - 2.1.11. Fixed self-tapping screw diam. 4x22mm
 - 2.1.12. Fixed self-tapping screw diam. 4.5x12mm
 - 2.1.13. Fixed self-tapping screw diam. 4.5x14mm
 - 2.1.14. Fixed self-tapping screw diam. 4.5x16mm
 - 2.1.15. Fixed self-tapping screw diam. 4.5x18mm
 - 2.1.16. Fixed self-tapping screw diam. 4.5x20mm
 - 2.1.17. Fixed self-tapping screw diam. 4.5x22mm
 - 2.2. Patient Card Stickers - 6 pcs.

3. Cervical Plate in the framework of:

1. Cervical Plate (1 pc./pack.), versions:
 - 1.1. Cervical Plate L1x20mm
 - 1.2. Cervical Plate L1x22mm

- 2.1.6. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 17 мм.
- 2.1.7. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 18 мм.
- 2.1.8. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 19 мм.
- 2.1.9. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 20 мм.
- 2.1.10. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 21 мм.
- 2.1.11. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 22 мм.
- 2.1.12. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 12 мм.
- 2.1.13. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 14 мм.
- 2.1.14. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 16 мм.
- 2.1.15. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 18 мм.
- 2.1.16. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм.
- 2.1.17. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22 мм.
- 2.2. Стикеры для карты пациента – 6 шт.

3. Пластина шейная в составе:

1. Пластина шейная (1 шт./уп.) варианты исполнения:
 - a. Пластина шейная одноуровневая 20 мм.
 - b. Пластина шейная одноуровневая 22 мм.
 - c. Пластина шейная одноуровневая 24 мм.
 - d. Пластина шейная одноуровневая 26 мм.
 - e. Пластина шейная одноуровневая 28 мм.
 - f. Пластина шейная одноуровневая 30 мм.
 - g. Пластина шейная одноуровневая 32 мм.
 - h. Пластина шейная одноуровневая 34 мм.
 - i. Пластина шейная двухуровневая 34 мм.
 - j. Пластина шейная двухуровневая 37 мм.
 - k. Пластина шейная двухуровневая 40 мм.

- 1.3. Cervical Plate L1x24mm
- 1.4. Cervical Plate L1x26mm
- 1.5. Cervical Plate L1x28mm
- 1.6. Cervical Plate L1x30mm
- 1.7. Cervical Plate L1x32mm
- 1.8. Cervical Plate L1x34mm
- 1.9. Cervical Plate L2x34mm
- 1.10. Cervical Plate L2x37mm
- 1.11. Cervical Plate L2x40mm
- 1.12. Cervical Plate L2x43mm
- 1.13. Cervical Plate L2x46mm
- 1.14. Cervical Plate L2x49mm
- 1.15. Cervical Plate L2x52mm
- 1.16. Cervical Plate L3x52mm
- 1.17. Cervical Plate L3x55mm
- 1.18. Cervical Plate L3x58mm
- 1.19. Cervical Plate L3x61mm
- 1.20. Cervical Plate L3x64mm
- 1.21. Cervical Plate L3x67mm
- 1.22. Cervical Plate L3x70mm
- 1.23. Cervical Plate L3x73mm
- 1.24. Cervical Plate L3x76mm
- 1.25. Cervical Plate L4x68mm
- 1.26. Cervical Plate L4x72mm
- 1.27. Cervical Plate L4x76mm
- 1.28. Cervical Plate L4x80mm
- 1.29. Cervical Plate L4x84mm
- 1.30. Cervical Plate L4x88mm
- 1.31. Cervical Plate L4x92mm

2. Patient Card Stickers - 6 pcs.

4. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" in the framework of:

1. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" (1 piece/stack or 2 pieces/stack.), versions:
 - 1.1. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x4 L7°
 - 1.2. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x5 L7°
 - 1.3. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x6 L7°
 - 1.4. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x7 L7°
 - 1.5. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x8 L7°

- l. Пластина шейная двухуровневая 43 мм.
 - m. Пластина шейная двухуровневая 46 мм.
 - n. Пластина шейная двухуровневая 49 мм.
 - o. Пластина шейная двухуровневая 52 мм.
 - p. Пластина шейная трехуровневая 52 мм.
 - q. Пластина шейная трехуровневая 55 мм.
 - r. Пластина шейная трехуровневая 58 мм.
 - s. Пластина шейная трехуровневая 61 мм.
 - t. Пластина шейная трехуровневая 64 мм.
 - u. Пластина шейная трехуровневая 67 мм.
 - v. Пластина шейная трехуровневая 70 мм.
 - w. Пластина шейная трехуровневая 73 мм.
 - x. Пластина шейная трехуровневая 76 мм.
 - y. Пластина шейная четырехуровневая 68 мм.
 - z. Пластина шейная четырехуровневая 72 мм.
 - aa. Пластина шейная четырехуровневая 76 мм.
 - bb. Пластина шейная четырехуровневая 80 мм.
 - cc. Пластина шейная четырехуровневая 84 мм.
 - dd. Пластина шейная четырехуровневая 88 мм.
 - ee. Пластина шейная четырехуровневая 92 мм.
2. Стикеры для карты пациента – 6 шт.

4. Кейдж межтеловой в составе:

1. Кейдж межтеловой (1 шт./уп. или 2 шт./уп.) варианты исполнения:
 - 1.1. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x4 мм.
 - 1.2. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x5 мм.
 - 1.3. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x6 мм.
 - 1.4. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x7 мм.
 - 1.5. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x8 мм.
 - 1.6. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x9 мм.
 - 1.7. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x4 мм.
 - 1.8. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x5 мм.
 - 1.9. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x6 мм.
 - 1.10. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x7 мм.
 - 1.11. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x8 мм.
 - 1.12. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x9 мм.

- 1.6. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x9 L7°
- 1.7. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x4 L7°
- 1.8. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x5 L7°
- 1.9. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x6 L7°
- 1.10. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x7 L7°
- 1.11. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x8 L7°
- 1.12. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x9 L7°
- 1.13. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x4 L7°
- 1.14. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x5 L7°
- 1.15. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x6 L7°
- 1.16. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x7 L7°
- 1.17. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x8 L7°
- 1.18. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x9 L7°
- 1.19. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x4 L7°
- 1.20. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x5 L7°
- 1.21. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x6 L7°
- 1.22. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x7 L7°
- 1.23. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x8 L7°
- 1.24. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x9 L7°
- 1.25. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x4 L7°
- 1.26. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x5 L7°
- 1.27. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x6 L7°
- 1.28. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x7 L7°
- 1.29. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x8 L7°
- 1.30. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x9 L7°
- 1.31. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x14x4 L5°
- 1.32. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x14x5 L5°
- 1.33. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x14x6 L5°
- 1.34. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x14x7 L5°
- 1.35. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x14x8 L5°
- 1.36. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x14x9 L5°
- 1.37. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x14x4 L5°

1.13.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x4 мм.		1.38.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x5 L5°
1.14.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x5 мм.		1.39.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x6 L5°
1.15.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x6 мм.		1.40.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x7 L5°
1.16.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x7 мм.		1.41.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x8 L5°
1.17.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x8 мм.		1.42.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x9 L5°
1.18.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x9 мм.		1.43.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x4 L5°
1.19.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x4 мм.		1.44.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x5 L5°
1.20.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x5 мм.		1.45.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x6 L5°
1.21.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x6 мм.		1.46.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x7 L5°
1.22.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x7 мм.		1.47.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x8 L5°
1.23.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x8 мм.		1.48.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x9 L5°
1.24.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x9 мм.		1.49.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x4 L5°
1.25.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x4 мм.		1.50.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x5 L5°
1.26.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x5 мм.		1.51.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x6 L5°
1.27.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x6 мм.		1.52.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x7 L5°
1.28.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x7 мм.		1.53.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x8 L5°
1.29.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x8 мм.		1.54.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x9 L5°
1.30.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x9 мм.		1.55.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 15x18x4 L5°
1.31.	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x4 мм.		1.56.	Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 15x18x5 L5°

- 1.32. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x5 мм.
- 1.33. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x6 мм.
- 1.34. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x7 мм.
- 1.35. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x8 мм.
- 1.36. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x9 мм.
- 1.37. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x4 мм.
- 1.38. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x5 мм.
- 1.39. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x6 мм.
- 1.40. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x7 мм.
- 1.41. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x8 мм.
- 1.42. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x9 мм.
- 1.43. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x4 мм.
- 1.44. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x5 мм.
- 1.45. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x6 мм.
- 1.46. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x7 мм.
- 1.47. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x8 мм.
- 1.48. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x9 мм.
- 1.49. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x4 мм.
- 1.50. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x5 мм.

- | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------|--------|---------------|
| 1.57. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 15x18x6 | L5° | | | |
| 1.58. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 15x18x7 | L5° | | | |
| 1.59. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 15x18x8 | L5° | | | |
| 1.60. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 15x18x9 | L5° | | | |
| 1.61. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK "Flat" |
| | 12x14x4 | L7° | | | |
| 1.62. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK "Flat" |
| | 12x14x5 | L7° | | | |
| 1.63. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK "Flat" |
| | 12x14x6 | L7° | | | |
| 1.64. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK "Flat" |
| | 12x14x7 | L7° | | | |
| 1.65. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK "Flat" |
| | 12x14x8 | L7° | | | |
| 1.66. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK "Flat" |
| | 12x14x9 | L7° | | | |
| 1.67. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK "Flat" |
| | 14x14x4 | L7° | | | |
| 1.68. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK "Flat" |
| | 14x14x5 | L7° | | | |
| 1.69. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK "Flat" |
| | 14x14x6 | L7° | | | |
| 1.70. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK "Flat" |
| | 14x14x7 | L7° | | | |
| 1.71. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK "Flat" |
| | 14x14x8 | L7° | | | |
| 1.72. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK "Flat" |
| | 14x14x9 | L7° | | | |
| 1.73. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK "Flat" |
| | 12x16x4 | L7° | | | |
| 1.74. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK "Flat" |
| | 12x16x5 | L7° | | | |
| 1.75. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK "Flat" |
| | 12x16x6 | L7° | | | |

- 1.51. Кейдж межтеловой передний купо: идный, угол лордоза 5°, 14x16x6 мм.
- 1.52. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x7 мм.
- 1.53. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x8 мм.
- 1.54. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x9 мм.
- 1.55. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x4 мм.
- 1.56. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x5 мм.
- 1.57. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x6 мм.
- 1.58. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x7 мм.
- 1.59. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x8 мм.
- 1.60. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x9 мм.
- 1.61. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x4 мм.
- 1.62. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x5 мм.
- 1.63. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x6 мм.
- 1.64. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x7 мм.
- 1.65. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x8 мм.
- 1.66. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x9 мм.
- 1.67. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x4 мм.
- 1.68. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x5 мм.
- 1.69. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x6 мм.

- | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
| 1.76. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| | 12x16x7 | | | | | L7° |
| 1.77. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| | 12x16x8 | | | | | L7° |
| 1.78. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| | 12x16x9 | | | | | L7° |
| 1.79. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| | 14x16x4 | | | | | L7° |
| 1.80. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| | 14x16x5 | | | | | L7° |
| 1.81. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| | 14x16x6 | | | | | L7° |
| 1.82. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| | 14x16x7 | | | | | L7° |
| 1.83. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| | 14x16x8 | | | | | L7° |
| 1.84. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| | 14x16x9 | | | | | L7° |
| 1.85. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| | 15x18x4 | | | | | L7° |
| 1.86. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| | 15x18x5 | | | | | L7° |
| 1.87. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| | 15x18x6 | | | | | L7° |
| 1.88. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| | 15x18x7 | | | | | L7° |
| 1.89. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| | 15x18x8 | | | | | L7° |
| 1.90. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| | 15x18x9 | | | | | L7° |
| 1.91. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Dome shaped" |
| | 12x14x4 | | | | | L5° |
| 1.92. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Dome shaped" |
| | 12x14x5 | | | | | L5° |
| 1.93. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Dome shaped" |
| | 12x14x6 | | | | | L5° |
| 1.94. | Cervical | Interbody | Fusion | Device | TiPEEK | "Dome shaped" |
| | 12x14x7 | | | | | L5° |

- 1.70. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x7 мм.
- 1.71. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x8 мм.
- 1.72. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x9 мм.
- 1.73. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x4 мм.
- 1.74. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x5 мм.
- 1.75. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x6 мм.
- 1.76. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x7 мм.
- 1.77. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x8 мм.
- 1.78. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x9 мм.
- 1.79. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x4 мм.
- 1.80. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x5 мм.
- 1.81. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x6 мм.
- 1.82. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x7 мм.
- 1.83. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x8 мм.
- 1.84. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x9 мм.
- 1.85. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x4 мм.
- 1.86. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x5 мм.
- 1.87. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x6 мм.
- 1.88. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x7 мм.

- 1.95. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x8 L5°
- 1.96. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x9 L5°
- 1.97. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x4 L5°
- 1.98. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x5 L5°
- 1.99. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x6 L5°
- 1.100. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x7 L5°
- 1.101. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x8 L5°
- 1.102. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x9 L5°
- 1.103. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°
- 1.104. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x5 L5°
- 1.105. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x6 L5°
- 1.106. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x7 L5°
- 1.107. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x8 L5°
- 1.108. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x9 L5°
- 1.109. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x4 L5°
- 1.110. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x5 L5°
- 1.111. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x6 L5°
- 1.112. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x7 L5°
- 1.113. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x8 L5°

- 1.89. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x8 мм.
- 1.90. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x9 мм.
- 1.91. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x4 мм.
- 1.92. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x5 мм.
- 1.93. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x6 мм.
- 1.94. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x7 мм.
- 1.95. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x8 мм.
- 1.96. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x9 мм.
- 1.97. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x4 мм.
- 1.98. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x5 мм.
- 1.99. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x6 мм.
- 1.100. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x7 мм.
- 1.101. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x8 мм.
- 1.102. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x9 мм.
- 1.103. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x4 мм.
- 1.104. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x5 мм.
- 1.105. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x6 мм.
- 1.106. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x7 мм.
- 1.107. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x8 мм.

- 1.114. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x9 L5°
- 1.115. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x4 L5°
- 1.116. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x5 L5°
- 1.117. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x6 L5°
- 1.118. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x7 L5°
- 1.119. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x8 L5°
- 1.120. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x9 L5°
- 1.121. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x4 L7°- Ti markers
- 1.122. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x5 L7°- Ti markers
- 1.123. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x6 L7°- Ti markers
- 1.124. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x7 L7°- Ti markers
- 1.125. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x8 L7°- Ti markers
- 1.126. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x9 L7°- Ti markers
- 1.127. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x4 L7°- Ti markers
- 1.128. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x5 L7°- Ti markers
- 1.129. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x6 L7°- Ti markers
- 1.130. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x7 L7°- Ti markers
- 1.131. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x8 L7°- Ti markers
- 1.132. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x9 L7°- Ti markers

- 1.108. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x9 мм.
- 1.109. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x4 мм.
- 1.110. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x5 мм.
- 1.111. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x6 мм.
- 1.112. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x7 мм.
- 1.113. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x8 мм.
- 1.114. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x9 мм.
- 1.115. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x4 мм.
- 1.116. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x5 мм.
- 1.117. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x6 мм.
- 1.118. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x7 мм.
- 1.119. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x8 мм.
- 1.120. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x9 мм.
- 1.121. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x4 мм с Ti метками.
- 1.122. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x5 мм с Ti метками.
- 1.123. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x6 мм с Ti метками.
- 1.124. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x7 мм с Ti метками.
- 1.125. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x8 мм с Ti метками.
- 1.126. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x9 мм с Ti метками.

- 1.133. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x4 L7°- Ti markers
- 1.134. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x5 L7°- Ti markers
- 1.135. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x6 L7°- Ti markers
- 1.136. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x7 L7°- Ti markers
- 1.137. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x8 L7°- Ti markers
- 1.138. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x9 L7°- Ti markers
- 1.139. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x4 L7°- Ti markers
- 1.140. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x5 L7°- Ti markers
- 1.141. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x6 L7°- Ti markers
- 1.142. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x7 L7°- Ti markers
- 1.143. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x8 L7°- Ti markers
- 1.144. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x9 L7°- Ti markers
- 1.145. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x4 L7°- Ti markers
- 1.146. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x5 L7°- Ti markers
- 1.147. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x6 L7°- Ti markers
- 1.148. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x7 L7°- Ti markers
- 1.149. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x8 L7°- Ti markers
- 1.150. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x9 L7°- Ti markers
- 1.151. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x4 L5°- Ti markers

- 1.127. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x4 мм с Ti метками.
- 1.128. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x5 мм с Ti метками.
- 1.129. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x6 мм с Ti метками.
- 1.130. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x7 мм с Ti метками.
- 1.131. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x8 мм с Ti метками.
- 1.132. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x9 мм с Ti метками.
- 1.133. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x4 мм с Ti метками.
- 1.134. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x5 мм с Ti метками.
- 1.135. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x6 мм с Ti метками.
- 1.136. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x7 мм с Ti метками.
- 1.137. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x8 мм с Ti метками.
- 1.138. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x9 мм с Ti метками.
- 1.139. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x4 мм с Ti метками.
- 1.140. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x5 мм с Ti метками.
- 1.141. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x6 мм с Ti метками.
- 1.142. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x7 мм с Ti метками.
- 1.143. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x8 мм с Ti метками.
- 1.144. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x9 мм с Ti метками.
- 1.145. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x4 мм с Ti метками.

- 1.152. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x5 L5°- Ti markers
- 1.153. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x6 L5°- Ti markers
- 1.154. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x7 L5°- Ti markers
- 1.155. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x8 L5°- Ti markers
- 1.156. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x9 L5°- Ti markers
- 1.157. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x4 L5°- Ti markers
- 1.158. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x5 L5°- Ti markers
- 1.159. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x6 L5°- Ti markers
- 1.160. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x7 L5°- Ti markers
- 1.161. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x8 L5°- Ti markers
- 1.162. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x14x9 L5°- Ti markers
- 1.163. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers
- 1.164. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x5 L5°- Ti markers
- 1.165. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x6 L5°- Ti markers
- 1.166. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x7 L5°- Ti markers
- 1.167. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x8 L5°- Ti markers
- 1.168. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x16x9 L5°- Ti markers
- 1.169. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x4 L5°- Ti markers
- 1.170. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x5 L5°- Ti markers

- 1.146. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x5 мм с Ti метками.
- 1.147. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x6 мм с Ti метками.
- 1.148. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x7 мм с Ti метками.
- 1.149. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x8 мм с Ti метками.
- 1.150. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x9 мм с Ti метками.
- 1.151. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x4 мм с Ti метками.
- 1.152. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x5 мм с Ti метками.
- 1.153. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x6 мм с Ti метками.
- 1.154. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x7 мм с Ti метками.
- 1.155. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x8 мм с Ti метками.
- 1.156. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x9 мм с Ti метками.
- 1.157. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x4 мм с Ti метками.
- 1.158. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x5 мм с Ti метками.
- 1.159. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x6 мм с Ti метками.
- 1.160. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x7 мм с Ti метками.
- 1.161. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x8 мм с Ti метками.
- 1.162. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x9 мм с Ti метками.
- 1.163. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x4 мм с Ti метками.
- 1.164. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x5 мм с Ti метками.

- | | | |
|--------|----------------------------------|---------------|
| 1.171. | Cervical Interbody Fusion Device | "Dome shaped" |
| 1.172. | Cervical Interbody Fusion Device | "Dome shaped" |
| 1.173. | Cervical Interbody Fusion Device | "Dome shaped" |
| 1.174. | Cervical Interbody Fusion Device | "Dome shaped" |
| 1.175. | Cervical Interbody Fusion Device | "Dome shaped" |
| 1.176. | Cervical Interbody Fusion Device | "Dome shaped" |
| 1.177. | Cervical Interbody Fusion Device | "Dome shaped" |
| 1.178. | Cervical Interbody Fusion Device | "Dome shaped" |
| 1.179. | Cervical Interbody Fusion Device | "Dome shaped" |
| 1.180. | Cervical Interbody Fusion Device | "Dome shaped" |
| 1.181. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK "Flat" |
| 1.182. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK "Flat" |
| 1.183. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK "Flat" |
| 1.184. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK "Flat" |
| 1.185. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK "Flat" |
| 1.186. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK "Flat" |
| 1.187. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK "Flat" |
| 1.188. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK "Flat" |
| 1.189. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK "Flat" |

- 1.165. Кейдж межтеловой передний купо. лдный, угол лордоза 5°, 12x16x6 мм с Ti метками.
- 1.166. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x7 мм с Ti метками.
- 1.167. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x8 мм с Ti метками.
- 1.168. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x9 мм с Ti метками.
- 1.169. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x4 мм с Ti метками.
- 1.170. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x5 мм с Ti метками.
- 1.171. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x6 мм с Ti метками.
- 1.172. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x7 мм с Ti метками.
- 1.173. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x8 мм с Ti метками.
- 1.174. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x9 мм с Ti метками.
- 1.175. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x4 мм с Ti метками.
- 1.176. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x5 мм с Ti метками.
- 1.177. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x6 мм с Ti метками.
- 1.178. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x7 мм с Ti метками.
- 1.179. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x8 мм с Ti метками.
- 1.180. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x9 мм с Ti метками.
- 1.181. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x4 мм с Ti метками.
- 1.182. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x5 мм с Ti метками.
- 1.183. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x6 мм с Ti метками.

- | | | | |
|--------|----------------------------------|--------|--------|
| 1.190. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.191. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.192. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.193. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.194. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.195. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.196. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.197. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.198. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.199. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.200. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.201. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.202. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.203. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.204. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.205. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.206. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.207. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.208. | Cervical Interbody Fusion Device | TiPEEK | "Flat" |

- 1.184. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x7 мм с Ti метками.
- 1.185. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x8 мм с Ti метками.
- 1.186. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x9 мм с Ti метками.
- 1.187. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x4 мм с Ti метками.
- 1.188. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x5 мм с Ti метками.
- 1.189. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x6 мм с Ti метками.
- 1.190. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x7 мм с Ti метками.
- 1.191. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x8 мм с Ti метками.
- 1.192. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x9 мм с Ti метками.
- 1.193. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x4 мм с Ti метками.
- 1.194. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x5 мм с Ti метками.
- 1.195. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x6 мм с Ti метками.
- 1.196. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x7 мм с Ti метками.
- 1.197. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x8 мм с Ti метками.
- 1.198. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x9 мм с Ti метками.
- 1.199. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x4 мм с Ti метками.
- 1.200. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x5 мм с Ti метками.
- 1.201. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x6 мм с Ti метками.
- 1.202. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x7 мм с Ti метками.

- 1.209. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x8 L7°- Ti markers
- 1.210. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x9 L7°- Ti markers
- 1.211. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x4 L5°- Ti markers
- 1.212. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x5 L5°- Ti markers
- 1.213. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x6 L5°- Ti markers
- 1.214. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x7 L5°- Ti markers
- 1.215. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x8 L5°- Ti markers
- 1.216. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x9 L5°- Ti markers
- 1.217. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x4 L5°- Ti markers
- 1.218. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x5 L5°- Ti markers
- 1.219. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x6 L5°- Ti markers
- 1.220. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x7 L5°- Ti markers
- 1.221. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x8 L5°- Ti markers
- 1.222. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x9 L5°- Ti markers
- 1.223. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers
- 1.224. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers
- 1.225. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x6 L5°- Ti markers
- 1.226. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers
- 1.227. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers

- 1.203. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x8 мм с Ti метками.
- 1.204. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x9 мм с Ti метками.
- 1.205. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x4 мм с Ti метками.
- 1.206. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x5 мм с Ti метками.
- 1.207. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x6 мм с Ti метками.
- 1.208. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x7 мм с Ti метками.
- 1.209. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x8 мм с Ti метками.
- 1.210. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x9 мм с Ti метками.
- 1.211. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x4 мм с Ti метками.
- 1.212. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x5 мм с Ti метками.
- 1.213. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x6 мм с Ti метками.
- 1.214. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x7 мм с Ti метками.
- 1.215. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x8 мм с Ti метками.
- 1.216. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x9 мм с Ti метками.
- 1.217. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x4 мм с Ti метками.
- 1.218. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x5 мм с Ti метками.
- 1.219. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x6 мм с Ti метками.
- 1.220. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x7 мм с Ti метками.
- 1.221. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x8 мм с Ti метками.

- 1.228. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers
- 1.229. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x4 L5°- Ti markers
- 1.230. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x5 L5°- Ti markers
- 1.231. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x6 L5°- Ti markers
- 1.232. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x7 L5°- Ti markers
- 1.233. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x8 L5°- Ti markers
- 1.234. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x9 L5°- Ti markers
- 1.235. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x4 L5°- Ti markers
- 1.236. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x5 L5°- Ti markers
- 1.237. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x6 L5°- Ti markers
- 1.238. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x7 L5°- Ti markers
- 1.239. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x8 L5°- Ti markers
- 1.240. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x9 L5°- Ti markers

2. Patient Card Stickers - 6 pcs.

5. Instructions for use - 1 pc.

II. The Mecta-C Intervertebral Fusion Device System, consisting of:

1. Variable self-drilling screw versions consisting of:

1. Variable self-drilling screw in the framework of:

- 1.1. Variable self-drilling screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack.), design versions:

- 1.222. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x9 мм с Ti метками.
- 1.223. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x4 мм с Ti метками.
- 1.224. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x5 мм с Ti метками.
- 1.225. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x6 мм с Ti метками.
- 1.226. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x7 мм с Ti метками.
- 1.227. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x8 мм с Ti метками.
- 1.228. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x9 мм с Ti метками.
- 1.229. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x4 мм с Ti метками.
- 1.230. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x5 мм с Ti метками.
- 1.231. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x6 мм с Ti метками.
- 1.232. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x7 мм с Ti метками.
- 1.233. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x8 мм с Ti метками.
- 1.234. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x9 мм с Ti метками.
- 1.235. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x4 мм с Ti метками.
- 1.236. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x5 мм с Ti метками.
- 1.237. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x6 мм с Ti метками.
- 1.238. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x7 мм с Ti метками.
- 1.239. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x8 мм с Ti метками.
- 1.240. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x9 мм с Ti метками.

2. Стикеры для карты пациента – 6 шт.

- 1.1.1. Variable self-drilling screw diam. 4x12mm
- 1.1.2. Variable self-drilling screw diam. 4x13mm
- 1.1.3. Variable self-drilling screw diam. 4x14mm
- 1.1.4. Variable self-drilling screw diam. 4x15mm
- 1.1.5. Variable self-drilling screw diam. 4x16mm
- 1.1.6. Variable self-drilling screw diam. 4x17mm
- 1.1.7. Variable self-drilling screw diam. 4x18mm
- 1.1.8. Variable self-drilling screw diam. 4x19mm
- 1.1.9. Variable self-drilling screw diam. 4x20mm
- 1.1.10. Variable self-drilling screw diam. 4x21mm
- 1.1.11. Variable self-drilling screw diam. 4x22mm
- 1.2. Patient Card Stickers - 6 pcs.

2. Variable self-tapping screw in the framework of:

- 2.1. Variable self-tapping screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack..) design versions:
 - 2.1.1. Variable self-tapping screw diam. 4x12mm
 - 2.1.2. Variable self-tapping screw diam. 4x13mm
 - 2.1.3. Variable self-tapping screw diam. 4x14mm
 - 2.1.4. Variable self-tapping screw diam. 4x15mm
 - 2.1.5. Variable self-tapping screw diam. 4x16mm
 - 2.1.6. Variable self-tapping screw diam. 4x17mm
 - 2.1.7. Variable self-tapping screw diam. 4x18mm
 - 2.1.8. Variable self-tapping screw diam. 4x19mm
 - 2.1.9. Variable self-tapping screw diam. 4x20mm
 - 2.1.10. Variable self-tapping screw diam. 4x21mm
 - 2.1.11. Variable self-tapping screw diam. 4x22mm
- 2.2. Patient Card Stickers - 6 pcs.

2. Fixed self-drilling screw design versions:

1. Fixed self-drilling screw in the framework of:

- 1.1. Fixed self-drilling screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack.), versions:
 - 1.1.1. Fixed self-drilling screw diam. 4x12mm
 - 1.1.2. Fixed self-drilling screw diam. 4x13mm
 - 1.1.3. Fixed self-drilling screw diam. 4x14mm
 - 1.1.4. Fixed self-drilling screw diam. 4x15mm
 - 1.1.5. Fixed self-drilling screw diam. 4x16mm
 - 1.1. Fixed self-drilling screw diam. 4x17mm

5. Инструкция по применению – 1 шт.

II. Система для межпозвонкового соединения Места-С в составе:

1. Винт костный шейный, самосверлящий варианты исполнения:

1. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол в составе:

1.1. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.) варианты исполнения:

- 1.1.1. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12 мм.
- 1.1.2. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 13 мм.
- 1.1.3. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 14 мм.
- 1.1.4. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 15 мм.
- 1.1.5. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 16 мм.
- 1.1.6. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 17 мм.
- 1.1.7. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 18 мм.
- 1.1.8. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 19 мм.
- 1.1.9. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 20 мм.
- 1.1.10. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 21 мм.
- 1.1.11. Винт костный шейный, самосверлящий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22 мм.

1.2. Стикеры для карты пациента – 6 шт.

2. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол в составе:

а. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.) варианты исполнения:

- 2.1.1. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 12 мм.
- 2.1.2. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 13 мм.

1.1 Fixed self-drilling screw diam. 4x18mm

1.1.8. Fixed self-drilling screw diam. 4x19mm

1.1.9. Fixed self-drilling screw diam. 4x20mm

1.1.10. Fixed self-drilling screw diam. 4x21mm

1.1.11. Fixed self-drilling screw diam. 4x22mm

1.1.12. Fixed self-drilling screw diam. 4,5x12mm

1.1.13. Fixed self-drilling screw diam. 4,5x14mm

1.1.14. Fixed self-drilling screw diam. 4,5x16mm

1.1.15. Fixed self-drilling screw diam. 4,5x18mm

1.1.16. Fixed self-drilling screw diam. 4,5x20mm

1.1.17. Fixed self-drilling screw diam. 4,5x22mm

1.2. Patient Card Stickers - 6 pcs.

2. Fixed self-tapping screw in the framework of:

2.1. Fixed self-tapping screw (1 piece/stack, 2 pieces/stack or 4 pieces/stack.), versions:

2.1.1. Fixed self-tapping screw diam. 4x12mm

2.1.2. Fixed self-tapping screw diam. 4x13mm

2.1.3. Fixed self-tapping screw diam. 4x14mm

2.1.4. Fixed self-tapping screw diam. 4x15mm

2.1.5. Fixed self-tapping screw diam. 4x16mm

2.1.6. Fixed self-tapping screw diam. 4x17mm

2.1.7. Fixed self-tapping screw diam. 4x18mm

2.1.8. Fixed self-tapping screw diam. 4x19mm

2.1.9. Fixed self-tapping screw diam. 4x20mm

2.1.10. Fixed self-tapping screw diam. 4x21mm

2.1.11. Fixed self-tapping screw diam. 4x22mm

2.1.12. Fixed self-tapping screw diam. 4.5x12mm

2.1.13. Fixed self-tapping screw diam. 4.5x14mm

2.1.14. Fixed self-tapping screw diam. 4.5x16mm

2.1.15. Fixed self-tapping screw diam. 4.5x18mm

2.1.16. Fixed self-tapping screw diam. 4.5x20mm

2.1.17. Fixed self-tapping screw diam. 4.5x22mm

2.2. Patient Card Stickers - 6 pcs.

3. Cervical Plate in the framework of:

1. Cervical Plate (1 pc./pack.), versions:

1.1. Cervical Plate L1x20mm

1.2. Cervical Plate L1x22mm

- 2.1.3. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 14 мм.
- 2.1.4. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 15 мм.
- 2.1.5. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 16 мм.
- 2.1.6. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 17 мм.
- 2.1.7. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 18 мм.
- 2.1.8. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 19 мм.
- 2.1.9. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 20 мм.
- 2.1.10. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 21 мм.
- 2.1.11. Винт костный шейный, самосверлящий, ригидный угол диаметр, 4 мм, длина 22 мм.

b. Стикеры для карты пациента – 6 шт.

2. Винт костный шейный, самонарезающий варианты исполнения:

1. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол в составе:
 - 1.1. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.) варианты исполнения:
 - 1.1.1. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 12 мм.
 - 1.1.2. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 13 мм.
 - 1.1.3. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 14 мм.
 - 1.1.4. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 15 мм.
 - 1.1.5. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 16 мм.
 - 1.1.6. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 17 мм.
 - 1.1.7. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 18 мм.
 - 1.1.8. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол,

- 1.3. Cervical Plate L1x24mm
- 1.4. Cervical Plate L1x26mm
- 1.5. Cervical Plate L1x28mm
- 1.6. Cervical Plate L1x30mm
- 1.7. Cervical Plate L1x32mm
- 1.8. Cervical Plate L1x34mm
- 1.9. Cervical Plate L2x34mm
- 1.10. Cervical Plate L2x37mm
- 1.11. Cervical Plate L2x40mm
- 1.12. Cervical Plate L2x43mm
- 1.13. Cervical Plate L2x46mm
- 1.14. Cervical Plate L2x49mm
- 1.15. Cervical Plate L2x52mm
- 1.16. Cervical Plate L3x52mm
- 1.17. Cervical Plate L3x55mm
- 1.18. Cervical Plate L3x58mm
- 1.19. Cervical Plate L3x61mm
- 1.20. Cervical Plate L3x64mm
- 1.21. Cervical Plate L3x67mm
- 1.22. Cervical Plate L3x70mm
- 1.23. Cervical Plate L3x73mm
- 1.24. Cervical Plate L3x76mm
- 1.25. Cervical Plate L4x68mm
- 1.26. Cervical Plate L4x72mm
- 1.27. Cervical Plate L4x76mm
- 1.28. Cervical Plate L4x80mm
- 1.29. Cervical Plate L4x84mm
- 1.30. Cervical Plate L4x88mm
- 1.31. Cervical Plate L4x92mm

2. Patient Card Stickers - 6 pcs.

4. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” in the framework of:

1. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” (1 piece/stack or 2 pieces/stack.), versions:
 - 1.1. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x4 L7°
 - 1.2. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x5 L7°
 - 1.3. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x6 L7°
 - 1.4. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x7 L7°
 - 1.5. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x8 L7°

диаметр 4 мм, длина 19 мм.

1.1.9. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 20 мм.

1.1.10. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 21 мм.

1.1.11. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4 мм, длина 22 мм.

1.1.12. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 12 мм.

1.1.13. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 14 мм.

1.1.14. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 16 мм.

1.1.15. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 18 мм.

1.1.16. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм.

1.1.17. Винт костный шейный, самонарезающий, переменный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22 мм.

1.2. Стикеры для карты пациента – 6 шт.

2. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол в составе:

2.1. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол (1 шт./уп., 2 шт./уп. или 4 шт./уп.) варианты исполнения:

2.1.1. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 12 мм.

2.1.2. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 13 мм.

2.1.3. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 14 мм.

2.1.4. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 15 мм.

2.1.5. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 16 мм.

2.1.6. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 17 мм.

2.1.7. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 18 мм.

2.1.8. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр

1.6. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x14x9 L7°

1.7. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x4 L7°

1.8. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x5 L7°

1.9. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x6 L7°

1.10. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x7 L7°

1.11. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x8 L7°

1.12. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x14x9 L7°

1.13. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x4 L7°

1.14. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x5 L7°

1.15. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x6 L7°

1.16. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x7 L7°

1.17. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x8 L7°

1.18. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 12x16x9 L7°

1.19. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x4 L7°

1.20. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x5 L7°

1.21. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x6 L7°

1.22. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x7 L7°

1.23. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x8 L7°

1.24. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 14x16x9 L7°

1.25. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x4 L7°

1.26. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x5 L7°

1.27. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x6 L7°

1.28. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x7 L7°

1.29. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x8 L7°

1.30. Cervical Interbody Fusion Device “Flat” 15x18x9 L7°

1.31. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x14x4 L5°

1.32. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x14x5 L5°

1.33. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x14x6 L5°

1.34. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x14x7 L5°

1.35. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x14x8 L5°

1.36. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x14x9 L5°

1.37. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x14x4 L5°

- 4 мм, длина 19 мм.
- 2.1.9. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 20 мм.
- 2.1.10. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 21 мм.
- 2.1.11. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4 мм, длина 22 мм.
- 2.1.12. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 12 мм.
- 2.1.13. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 14 мм.
- 2.1.14. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 16 мм.
- 2.1.15. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 18 мм.
- 2.1.16. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм.
- 2.1.17. Винт костный шейный, самонарезающий, ригидный угол, диаметр 4,5 мм, длина 22 мм.
- 2.2. Стикеры для карты пациента – 6 шт.

3. Пластина шейная в составе:

1. Пластина шейная (1 шт./уп.) варианты исполнения:

- 1.1. Пластина шейная одноуровневая 20 мм.
- 1.2. Пластина шейная одноуровневая 22 мм.
- 1.3. Пластина шейная одноуровневая 24 мм.
- 1.4. Пластина шейная одноуровневая 26 мм.
- 1.5. Пластина шейная одноуровневая 28 мм.
- 1.6. Пластина шейная одноуровневая 30 мм.
- 1.7. Пластина шейная одноуровневая 32 мм.
- 1.8. Пластина шейная одноуровневая 34 мм.
- 1.9. Пластина шейная двухуровневая 34 мм.
- 1.10. Пластина шейная двухуровневая 37 мм.
- 1.11. Пластина шейная двухуровневая 40 мм.
- 1.12. Пластина шейная двухуровневая 43 мм.
- 1.13. Пластина шейная двухуровневая 46 мм.
- 1.14. Пластина шейная двухуровневая 49 мм.
- 1.15. Пластина шейная двухуровневая 52 мм.
- 1.16. Пластина шейная трехуровневая 5 м.

- 1.38. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x14x5 L5°
- 1.39. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x14x6 L5°
- 1.40. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x14x7 L5°
- 1.41. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x14x8 L5°
- 1.42. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x14x9 L5°
- 1.43. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x16x4 L5°
- 1.44. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x16x5 L5°
- 1.45. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x16x6 L5°
- 1.46. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x16x7 L5°
- 1.47. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x16x8 L5°
- 1.48. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 12x16x9 L5°
- 1.49. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x16x4 L5°
- 1.50. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x16x5 L5°
- 1.51. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x16x6 L5°
- 1.52. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x16x7 L5°
- 1.53. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x16x8 L5°
- 1.54. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 14x16x9 L5°
- 1.55. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 15x18x4 L5°
- 1.56. Cervical Interbody Fusion Device “Dome shaped” 15x18x5 L5°

1.17.	Пластина шейная трехуровневая 51 мм.	1.57.	Cervical Interbody Fusion Device	"Dome shaped"
1.18.	Пластина шейная трехуровневая 58 мм.	1.58.	Cervical Interbody Fusion Device	"Dome shaped"
1.19.	Пластина шейная трехуровневая 61 мм.	1.59.	Cervical Interbody Fusion Device	"Dome shaped"
1.20.	Пластина шейная трехуровневая 64 мм.	1.60.	Cervical Interbody Fusion Device	"Dome shaped"
1.21.	Пластина шейная трехуровневая 67 мм.	1.61.	Cervical Interbody Fusion Device	TiPEEK "Flat"
1.22.	Пластина шейная трехуровневая 70 мм.	1.62.	Cervical Interbody Fusion Device	TiPEEK "Flat"
1.23.	Пластина шейная трехуровневая 73 мм.	1.63.	Cervical Interbody Fusion Device	TiPEEK "Flat"
1.24.	Пластина шейная трехуровневая 76 мм.	1.64.	Cervical Interbody Fusion Device	TiPEEK "Flat"
1.25.	Пластина шейная четырехуровневая 68 мм.	1.65.	Cervical Interbody Fusion Device	TiPEEK "Flat"
1.26.	Пластина шейная четырехуровневая 72 мм.	1.66.	Cervical Interbody Fusion Device	TiPEEK "Flat"
1.27.	Пластина шейная четырехуровневая 76 мм.	1.67.	Cervical Interbody Fusion Device	TiPEEK "Flat"
1.28.	Пластина шейная четырехуровневая 80 мм.	1.68.	Cervical Interbody Fusion Device	TiPEEK "Flat"
1.29.	Пластина шейная четырехуровневая 84 мм.	1.69.	Cervical Interbody Fusion Device	TiPEEK "Flat"
1.30.	Пластина шейная четырехуровневая 88 мм.	1.70.	Cervical Interbody Fusion Device	TiPEEK "Flat"
1.31.	Пластина шейная четырехуровневая 92 мм.	1.71.	Cervical Interbody Fusion Device	TiPEEK "Flat"
2.	Стикеры для карты пациента – 6 шт.	1.72.	Cervical Interbody Fusion Device	TiPEEK "Flat"
4.	Кейдж межтеловой в составе:	1.73.	Cervical Interbody Fusion Device	TiPEEK "Flat"
1.	Кейдж межтеловой (1 шт./уп. или 2 шт./уп.) варианты исполнения:	1.74.	Cervical Interbody Fusion Device	TiPEEK "Flat"
1.1.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x4 мм.	1.75.	Cervical Interbody Fusion Device	TiPEEK "Flat"
1.2.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x5 мм.			
1.3.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x6 мм.			
1.4.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x7 мм.			
1.5.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x8 мм.			
1.6.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x9 мм.			
1.7.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x4 мм.			
1.8.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x5 мм.			
1.9.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x6 мм.			
1.10.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x7 мм.			
1.11.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x8 мм.			
1.12.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x9 мм.			
1.13.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x4 мм.			
1.14.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x5 мм.			

1.15.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x6 мм.	1.76.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x16x7 L7°
1.16.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x7 мм.	1.77.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x16x8 L7°
1.17.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x8 мм.	1.78.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 12x16x9 L7°
1.18.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x9 мм.	1.79.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x4 L7°
1.19.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x4 мм.	1.80.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x5 L7°
1.20.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x5 мм.	1.81.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x6 L7°
1.21.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x6 мм.	1.82.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x7 L7°
1.22.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x7 мм.	1.83.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x8 L7°
1.23.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x8 мм.	1.84.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 14x16x9 L7°
1.24.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x9 мм.	1.85.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x4 L7°
1.25.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x4 мм.	1.86.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x5 L7°
1.26.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x5 мм.	1.87.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x6 L7°
1.27.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x6 мм.	1.88.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x7 L7°
1.28.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x7 мм.	1.89.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x8 L7°
1.29.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x8 мм.	1.90.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Flat” 15x18x9 L7°
1.30.	Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x9 мм.	1.91.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x14x4 L5°
1.31.	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x4 мм.	1.92.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x14x5 L5°
1.32.	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x5 мм.	1.93.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x14x6 L5°
1.33.	Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x6 мм.	1.94.	Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK “Dome shaped” 12x14x7 L5°

- 1.34. Кейдж межтеловой передний купо-идный, угол лордоза 5°, 12x14x7 мм.
- 1.35. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x8 мм.
- 1.36. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x9 мм.
- 1.37. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x4 мм.
- 1.38. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x5 мм.
- 1.39. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x6 мм.
- 1.40. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x7 мм.
- 1.41. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x8 мм.
- 1.42. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x9 мм.
- 1.43. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x4 мм.
- 1.44. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x5 мм.
- 1.45. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x6 мм.
- 1.46. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x7 мм.
- 1.47. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x8 мм.
- 1.48. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x9 мм.
- 1.49. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x4 мм.
- 1.50. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x5 мм.
- 1.51. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x6 мм.
- 1.52. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x7 мм.

- 1.95. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x8 L5°
- 1.96. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x9 L5°
- 1.97. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x4 L5°
- 1.98. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x5 L5°
- 1.99. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x6 L5°
- 1.100. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x7 L5°
- 1.101. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x8 L5°
- 1.102. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x9 L5°
- 1.103. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°
- 1.104. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x5 L5°
- 1.105. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x6 L5°
- 1.106. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x7 L5°
- 1.107. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x8 L5°
- 1.108. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x9 L5°
- 1.109. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x4 L5°
- 1.110. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x5 L5°
- 1.111. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x6 L5°
- 1.112. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x7 L5°
- 1.113. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x8 L5°

- 1.53. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x8 мм.
- 1.54. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x9 мм.
- 1.55. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x4 мм.
- 1.56. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x5 мм.
- 1.57. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x6 мм.
- 1.58. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x7 мм.
- 1.59. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x8 мм.
- 1.60. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x9 мм.
- 1.61. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x4 мм.
- 1.62. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x5 мм.
- 1.63. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x6 мм.
- 1.64. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x7 мм.
- 1.65. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x8 мм.
- 1.66. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x9 мм.
- 1.67. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x4 мм.
- 1.68. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x5 мм.
- 1.69. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x6 мм.
- 1.70. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x7 мм.
- 1.71. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x8 мм.

- 1.114. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x9 L5°
- 1.115. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x4 L5°
- 1.116. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x5 L5°
- 1.117. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x6 L5°
- 1.118. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x7 L5°
- 1.119. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x8 L5°
- 1.120. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x9 L5°
- 1.121. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x4 L7°- Ti markers
- 1.122. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x5 L7°- Ti markers
- 1.123. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x6 L7°- Ti markers
- 1.124. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x7 L7°- Ti markers
- 1.125. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x8 L7°- Ti markers
- 1.126. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x14x9 L7°- Ti markers
- 1.127. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x4 L7°- Ti markers
- 1.128. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x5 L7°- Ti markers
- 1.129. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x6 L7°- Ti markers
- 1.130. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x7 L7°- Ti markers
- 1.131. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x8 L7°- Ti markers
- 1.132. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x14x9 L7°- Ti markers

- 1.72. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x9 мм.
- 1.73. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x4 мм.
- 1.74. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x5 мм.
- 1.75. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x6 мм.
- 1.76. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x7 мм.
- 1.77. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x8 мм.
- 1.78. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x9 мм.
- 1.79. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x4 мм.
- 1.80. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x5 мм.
- 1.81. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x6 мм.
- 1.82. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x7 мм.
- 1.83. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x8 мм.
- 1.84. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x9 мм.
- 1.85. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x4 мм.
- 1.86. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x5 мм.
- 1.87. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x6 мм.
- 1.88. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x7 мм.
- 1.89. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x8 мм.
- 1.90. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x9 мм.

- 1.133. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x4 L7°- Ti markers
- 1.134. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x5 L7°- Ti markers
- 1.135. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x6 L7°- Ti markers
- 1.136. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x7 L7°- Ti markers
- 1.137. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x8 L7°- Ti markers
- 1.138. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 12x16x9 L7°- Ti markers
- 1.139. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x4 L7°- Ti markers
- 1.140. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x5 L7°- Ti markers
- 1.141. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x6 L7°- Ti markers
- 1.142. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x7 L7°- Ti markers
- 1.143. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x8 L7°- Ti markers
- 1.144. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 14x16x9 L7°- Ti markers
- 1.145. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x4 L7°- Ti markers
- 1.146. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x5 L7°- Ti markers
- 1.147. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x6 L7°- Ti markers
- 1.148. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x7 L7°- Ti markers
- 1.149. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x8 L7°- Ti markers
- 1.150. Cervical Interbody Fusion Device "Flat" 15x18x9 L7°- Ti markers
- 1.151. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 12x14x4 L5°- Ti markers

- 1.91. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x4 мм.
- 1.92. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x5 мм.
- 1.93. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x6 мм.
- 1.94. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x7 мм.
- 1.95. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x8 мм.
- 1.96. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x9 мм.
- 1.97. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x4 мм.
- 1.98. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x5 мм.
- 1.99. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x6 мм.
- 1.100. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x7 мм.
- 1.101. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x8 мм.
- 1.102. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x9 мм.
- 1.103. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x4 мм.
- 1.104. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x5 мм.
- 1.105. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x6 мм.
- 1.106. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x7 мм.
- 1.107. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x8 мм.
- 1.108. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x9 мм.
- 1.109. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x4 мм.

- | | | | | |
|--------|-------------------------|--------|--------|---------------|
| 1.152. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 12x14x5 L5°- Ti markers | | | |
| 1.153. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 12x14x6 L5°- Ti markers | | | |
| 1.154. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 12x14x7 L5°- Ti markers | | | |
| 1.155. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 12x14x8 L5°- Ti markers | | | |
| 1.156. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 12x14x9 L5°- Ti markers | | | |
| 1.157. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 14x14x4 L5°- Ti markers | | | |
| 1.158. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 14x14x5 L5°- Ti markers | | | |
| 1.159. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 14x14x6 L5°- Ti markers | | | |
| 1.160. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 14x14x7 L5°- Ti markers | | | |
| 1.161. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 14x14x8 L5°- Ti markers | | | |
| 1.162. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 14x14x9 L5°- Ti markers | | | |
| 1.163. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 12x16x4 L5°- Ti markers | | | |
| 1.164. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 12x16x5 L5°- Ti markers | | | |
| 1.165. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 12x16x6 L5°- Ti markers | | | |
| 1.166. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 12x16x7 L5°- Ti markers | | | |
| 1.167. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 12x16x8 L5°- Ti markers | | | |
| 1.168. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 12x16x9 L5°- Ti markers | | | |
| 1.169. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 14x16x4 L5°- Ti markers | | | |
| 1.170. | Cervical Interbody | Fusion | Device | "Dome shaped" |
| | 14x16x5 L5°- Ti markers | | | |

- 1.110. Кейдж межтеловой передний купоидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x5 мм.
- 1.111. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x6 мм.
- 1.112. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x7 мм.
- 1.113. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x8 мм.
- 1.114. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x9 мм.
- 1.115. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x4 мм.
- 1.116. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x5 мм.
- 1.117. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x6 мм.
- 1.118. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x7 мм.
- 1.119. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x8 мм.
- 1.120. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x9 мм.
- 1.121. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x4 мм с Ti метками.
- 1.122. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x5 мм с Ti метками.
- 1.123. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x6 мм с Ti метками.
- 1.124. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x7 мм с Ti метками.
- 1.125. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x8 мм с Ti метками.
- 1.126. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x14x9 мм с Ti метками.
- 1.127. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x4 мм с Ti метками.
- 1.128. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x5 мм с Ti метками.

- 1.171. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x6 L5°- Ti markers
- 1.172. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x7 L5°- Ti markers
- 1.173. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x8 L5°- Ti markers
- 1.174. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 14x16x9 L5°- Ti markers
- 1.175. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 15x18x4 L5°- Ti markers
- 1.176. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 15x18x5 L5°- Ti markers
- 1.177. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 15x18x6 L5°- Ti markers
- 1.178. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 15x18x7 L5°- Ti markers
- 1.179. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 15x18x8 L5°- Ti markers
- 1.180. Cervical Interbody Fusion Device "Dome shaped" 15x18x9 L5°- Ti markers
- 1.181. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x4 L7°- Ti markers
- 1.182. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x5 L7°- Ti markers
- 1.183. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x6 L7°- Ti markers
- 1.184. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x7 L7°- Ti markers
- 1.185. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x8 L7°- Ti markers
- 1.186. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 12x14x9 L7°- Ti markers
- 1.187. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x4 L7°- Ti markers
- 1.188. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x5 L7°- Ti markers
- 1.189. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 14x14x6 L7°- Ti markers

- 1.129. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x6 мм с Ti метками.
- 1.130. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x7 мм с Ti метками.
- 1.131. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x8 мм с Ti метками.
- 1.132. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x14x9 мм с Ti метками.
- 1.133. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x4 мм с Ti метками.
- 1.134. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x5 мм с Ti метками.
- 1.135. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x6 мм с Ti метками.
- 1.136. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x7 мм с Ti метками.
- 1.137. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x8 мм с Ti метками.
- 1.138. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 12x16x9 мм с Ti метками.
- 1.139. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x4 мм с Ti метками.
- 1.140. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x5 мм с Ti метками.
- 1.141. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x6 мм с Ti метками.
- 1.142. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x7 мм с Ti метками.
- 1.143. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x8 мм с Ti метками.
- 1.144. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 14x16x9 мм с Ti метками.
- 1.145. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x4 мм с Ti метками.
- 1.146. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x5 мм с Ti метками.
- 1.147. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x6 мм с Ti метками.

- | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|--------|--------|
| 1.190. | Cervical Interbody 14x14x7 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.191. | Cervical Interbody 14x14x8 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.192. | Cervical Interbody 14x14x9 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.193. | Cervical Interbody 12x16x4 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.194. | Cervical Interbody 12x16x5 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.195. | Cervical Interbody 12x16x6 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.196. | Cervical Interbody 12x16x7 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.197. | Cervical Interbody 12x16x8 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.198. | Cervical Interbody 12x16x9 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.199. | Cervical Interbody 14x16x4 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.200. | Cervical Interbody 14x16x5 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.201. | Cervical Interbody 14x16x6 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.202. | Cervical Interbody 14x16x7 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.203. | Cervical Interbody 14x16x8 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.204. | Cervical Interbody 14x16x9 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.205. | Cervical Interbody 15x18x4 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.206. | Cervical Interbody 15x18x5 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.207. | Cervical Interbody 15x18x6 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |
| 1.208. | Cervical Interbody 15x18x7 L7°- Ti markers | Fusion | Device | TiPEEK | "Flat" |

- 1.148. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x7 мм с Ti метками.
- 1.149. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x8 мм с Ti метками.
- 1.150. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, 15x18x9 мм с Ti метками.
- 1.151. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x4 мм с Ti метками.
- 1.152. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x5 мм с Ti метками.
- 1.153. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x6 мм с Ti метками.
- 1.154. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x7 мм с Ti метками.
- 1.155. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x8 мм с Ti метками.
- 1.156. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x14x9 мм с Ti метками.
- 1.157. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x4 мм с Ti метками.
- 1.158. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x5 мм с Ti метками.
- 1.159. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x6 мм с Ti метками.
- 1.160. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x7 мм с Ti метками.
- 1.161. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x8 мм с Ti метками.
- 1.162. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x14x9 мм с Ti метками.
- 1.163. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x4 мм с Ti метками.
- 1.164. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x5 мм с Ti метками.
- 1.165. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x6 мм с Ti метками.
- 1.166. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x7 мм с Ti метками.

- 1.209. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x8 L7°- Ti markers
- 1.210. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Flat" 15x18x9 L7°- Ti markers
- 1.211. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x4 L5°- Ti markers
- 1.212. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x5 L5°- Ti markers
- 1.213. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x6 L5°- Ti markers
- 1.214. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x7 L5°- Ti markers
- 1.215. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x8 L5°- Ti markers
- 1.216. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x14x9 L5°- Ti markers
- 1.217. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x4 L5°- Ti markers
- 1.218. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x5 L5°- Ti markers
- 1.219. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x6 L5°- Ti markers
- 1.220. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x7 L5°- Ti markers
- 1.221. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x8 L5°- Ti markers
- 1.222. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x14x9 L5°- Ti markers
- 1.223. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers
- 1.224. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers
- 1.225. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x6 L5°- Ti markers
- 1.226. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers
- 1.227. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers

- 1.167. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x8 мм с Ti метками.
- 1.168. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 12x16x9 мм с Ti метками.
- 1.169. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x4 мм с Ti метками.
- 1.170. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x5 мм с Ti метками.
- 1.171. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x6 мм с Ti метками.
- 1.172. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x7 мм с Ti метками.
- 1.173. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x8 мм с Ti метками.
- 1.174. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 14x16x9 мм с Ti метками.
- 1.175. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x4 мм с Ti метками.
- 1.176. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x5 мм с Ti метками.
- 1.177. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x6 мм с Ti метками.
- 1.178. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x7 мм с Ti метками.
- 1.179. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x8 мм с Ti метками.
- 1.180. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, 15x18x9 мм с Ti метками.
- 1.181. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x4 мм с Ti метками.
- 1.182. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x5 мм с Ti метками.
- 1.183. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x6 мм с Ti метками.
- 1.184. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x7 мм с Ti метками.
- 1.185. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x8 мм с Ti метками.

- 1.228. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 12x16x4 L5°- Ti markers
- 1.229. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x4 L5°- Ti markers
- 1.230. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x5 L5°- Ti markers
- 1.231. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x6 L5°- Ti markers
- 1.232. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x7 L5°- Ti markers
- 1.233. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x8 L5°- Ti markers
- 1.234. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 14x16x9 L5°- Ti markers
- 1.235. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x4 L5°- Ti markers
- 1.236. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x5 L5°- Ti markers
- 1.237. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x6 L5°- Ti markers
- 1.238. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x7 L5°- Ti markers
- 1.239. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x8 L5°- Ti markers
- 1.240. Cervical Interbody Fusion Device TiPEEK "Dome shaped" 15x18x9 L5°- Ti markers

2. Patient Card Stickers - 6 pcs.

5. Instructions for use - 1 pc.

- 1.186. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x14x9 мм с Ti метками.
- 1.187. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x4 мм с Ti метками.
- 1.188. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x5 мм с Ti метками.
- 1.189. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x6 мм с Ti метками.
- 1.190. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x7 мм с Ti метками.
- 1.191. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x8 мм с Ti метками.
- 1.192. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x14x9 мм с Ti метками.
- 1.193. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x4 мм с Ti метками.
- 1.194. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x5 мм с Ti метками.
- 1.195. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x6 мм с Ti метками.
- 1.196. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x7 мм с Ti метками.
- 1.197. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x8 мм с Ti метками.
- 1.198. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 12x16x9 мм с Ti метками.
- 1.199. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x4 мм с Ti метками.
- 1.200. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x5 мм с Ti метками.
- 1.201. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x6 мм с Ti метками.
- 1.202. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x7 мм с Ti метками.
- 1.203. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x8 мм с Ti метками.
- 1.204. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 14x16x9 мм с Ti метками.

- 1.205. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x4 мм с Ti метками.
- 1.206. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x5 мм с Ti метками.
- 1.207. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x6 мм с Ti метками.
- 1.208. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x7 мм с Ti метками.
- 1.209. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x8 мм с Ti метками.
- 1.210. Кейдж межтеловой передний плоский, угол лордоза 7°, TiPEEK, 15x18x9 мм с Ti метками.
- 1.211. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x4 мм с Ti метками.
- 1.212. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x5 мм с Ti метками.
- 1.213. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x6 мм с Ti метками.
- 1.214. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x7 мм с Ti метками.
- 1.215. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x8 мм с Ti метками.
- 1.216. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x14x9 мм с Ti метками.
- 1.217. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x4 мм с Ti метками.
- 1.218. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x5 мм с Ti метками.
- 1.219. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x6 мм с Ti метками.
- 1.220. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x7 мм с Ti метками.
- 1.221. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x8 мм с Ti метками.
- 1.222. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x14x9 мм с Ti метками.
- 1.223. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x4 мм с Ti метками.

- 1.224. Кейдж межтеловой передний купс идный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x5 мм с Ti метками.
- 1.225. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x6 мм с Ti метками.
- 1.226. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x7 мм с Ti метками.
- 1.227. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x8 мм с Ti метками.
- 1.228. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 12x16x9 мм с Ti метками.
- 1.229. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x4 мм с Ti метками.
- 1.230. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x5 мм с Ti метками.
- 1.231. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x6 мм с Ti метками.
- 1.232. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x7 мм с Ti метками.
- 1.233. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x8 мм с Ti метками.
- 1.234. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 14x16x9 мм с Ti метками.
- 1.235. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x4 мм с Ti метками.
- 1.236. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x5 мм с Ti метками.
- 1.237. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x6 мм с Ti метками.
- 1.238. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x7 мм с Ti метками.
- 1.239. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x8 мм с Ti метками.
- 1.240. Кейдж межтеловой передний куполовидный, угол лордоза 5°, TiPEEK, 15x18x9 мм с Ti метками.
2. Стикеры для карты пациента – 6 шт.

5. Инструкция по применению – 1 шт.

/Перевод с английского языка и итальянского языка на русский язык/

Директор по контролю за нормативно – правовым соответствием

Баж Стефано

30.08.2023 г.

/подписано/

/Печать/: АДВОКАТ МОНИКА МАРАЦЦИ (MONICA MARAZZI) * НОТАРИУС

№ 4814 (четыре тысячи восемьсот четырнадцать)

Г. Лугано (Швейцария), 31 (тридцать первое) августа 2023 года (две тысячи двадцать третьего года)-
Я, Моника МАРАЦЦИ (Monica MARAZZI), нижеподписавшийся государственный нотариус,
ведущий свою деятельность в г. Лугано (Швейцария), должным образом и в силу закона
уполномоченный на совершение нотариальных действий, настоящим удостоверяю подлинность
подписи, проставленной на обороте, и принадлежащей лицу, указанному ниже:-----

Стефано БАДЖ (Stefano BAJ), дата рождения: 12 (двенадцатое) июня 1980 (одна тысяча девятьсот
восьмидесятого года), пол: мужской, женат, гражданин Италии, проживающий в г. Ведано-Олона
(Италия), по адресу: Виа Альдо Моро 9/Б (девять/Б), являющийся держателем паспорта гражданина
Италии №.AV6066327 (AV шесть ноль шесть шесть три два семь), выданного муниципалитетом
г. Ведано-Олона 11 (одиннадцатого) июня 2015 (две тысячи пятнадцатого года), срок действия
которого истекает 12 (двенадцатого) июня 2025 (две тысячи двадцать пятого года);-----
личность которого я удостоверяю-----

Во свидетельство чего, проставляю свою подпись и скрепляю настоящий документ официальной
печатью.-----

Моника МАРАЦЦИ (Monica MARAZZI), государственный нотариус, должным образом
уполномоченный на совершение нотариальных действий Палатой адвокатов и нотариусов при
Апелляционном суде кантона Тичино, Лугано, Швейцария, ул. Кантонале, 19 (девятнадцать), 6901
Лугано (Швейцария), тел.: +41/91.922.74.06, monica.marazzi@mlegal.ch. -----

/подписано/

/Печать/: АДВОКАТ МОНИКА МАРАЦЦИ (MONICA MARAZZI) * НОТАРИУС

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 05 октября 1961 г.)

1. Страна: Республика и кантон Тичино (Швейцария)
Настоящий публично-правовой документ
2. был подписан **Моникой Марацци (Monica Marazzi)**
3. выступающей в качестве **нотариуса**,
4. скреплен печатью/штампом **вышеупомянутого нотариуса**,

Заверено:

- | | |
|--|--|
| 5. в г. Беллинцона | 6. 1 сентября 2023 г. |
| 7. Государственной канцелярией | |
| 8. за № 73998 | |
| 9. Печать/штамп
/Гербовая печать: Государственная
канцелярия кантона Тичино/ | 10. Подпись:
/подписано/
РОБЕРТА МАРТИНОЛИ
(ROBERTA MARTINOLI)
Секретарь |

Налог гг.: 35.-

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Кинах Валентиной Петровной

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать первого сентября две тысячи двадцать третьего года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Кинах Валентины Петровны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2023- 56-982
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

ПОДПИСЬ

Ф.А. Квитко

Гербовая печать
нотариуса г.Москвы
Квитко Ф.А

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 85 лист(а)(ов)

Нотариус

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать первого сентября две тысячи двадцать третьего года
Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы,
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2023- 56-983
Уплачено за совершение нотариального действия: 1600 руб. 00 коп.



Всего прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 85 лист(а) (ов)

Нотариус

Ф.А. Квитко

