

КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ «МЕДКАР» по ТУ 29.10.59-010-37600580-2017

варианты исполнения*:

- ☐ **«Диспансеризация» на базе транспортного средства АМС-49415Н**
- ☐ **«Диспансеризация» на базе транспортного средства VFM6AO**
- ☐ **«Диспансеризация» на базе транспортного средства ПМК-48415Н**
- ☐ **«Профосмотр» на базе транспортного средства 972200**
- ☐ **«Лучевая диагностика» на базе транспортного средства АЛ-59860С-2**
- ☐ **«Стоматология» на базе транспортного средства АФ-47434А**
- ☐ **«Офтальмология» на базе транспортного средства АФ-371703**
- ☐ **«Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 878913**
- ☐ **«Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 185514**
- ☐ **«Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 692732**
- ☐ **«Флюорография» на базе транспортного средства 385527**
- ☐ **«Флюорография» на базе транспортного средства ПМК-48415К**
- ☐ **«Маммография» на базе транспортного средства ПМК-48415К**

Планировка _ _ _ _

ПАСПОРТ

*** - При заказе исполнение выделено (в пустом квадрате стоит «х» или «√»)**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» по ТУ 29.10.59-010-37600580-2017 (далее – Комплекс), предназначен для применения в медицинских целях при установке его по месту временной дислокации и не предназначен для применения в медицинских целях при перевозках или перемещении.

Варианты исполнения:

1. Комплекс «Диспансеризация» предназначен для проведения комплекса мероприятий в системе здравоохранения с целью выявления и предупреждения развития различных заболеваний у населения.
2. Комплекс «Профосмотр» предназначен для проведения обязательного медицинского обследования, определяющего возможности человека работать в определенных производственных условиях.
3. Комплекс «Лучевая диагностика» предназначен для проведения скрининга молочных желез и грудной клетки.
4. Комплекс «Стоматология» предназначен для терапевтического приема с целью профилактики и лечения полости рта.
5. Комплекс «Офтальмология» предназначена для диагностики, профилактики и назначения лечения органов зрения.
6. «Фельдшерско-акушерский пункт» - предназначен для первичной доврачебной медико-санитарной помощи.
7. «Флюорография» - предназначен для проведения скрининга грудной клетки.
8. «Маммография» - предназначен для проведения скрининга молочной железы.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Конструкция Комплекса

Комплекс представляет собой изотермический фургон (далее Кузов), состоящий из медицинских кабинетов (далее Кабинеты), коридора, генераторного отсека, отсека под внешний блок кондиционера и хозяйственного отсека (с возможностью размещения биотуалета).

Комплекс изготавливается в восьми вариантах исполнения, в зависимости от назначения и комплектации и оснащен следующими медицинскими кабинетами:

- Кабинет «Диагностика»;
- Кабинет «Офтальмология»;
- Кабинет «Женское здоровье»;
- Кабинет «Стоматология»;
- Кабинет «Лаборатория»;
- Кабинет «Маммография»;
- Кабинет «Рентгенодиагностика».

Варианты исполнения:

1. Комплекс «Диспансеризация» состоит из кабинетов: «Диагностика», «Лаборатория», «Женское здоровье» и «Рентгенодиагностика/маммография». Размещается на базе транспортного средства АМС-49415Н, или VFM6AO или ПМК-48415Н.
2. «Профосмотр» - предназначен для проведения обязательного медицинского обследования, определяющего возможности человека работать в определенных производственных условиях. Состоит из кабинетов: «Офтальмология», «Лаборатория», «Диагностика», «Женское здоровье», «Рентгенодиагностика». Размещается на базе транспортного средства 972200. В зависимости от назначения, Комплекс имеет 3 планировки.
3. Комплекс «Лучевая диагностика» состоит из кабинетов: «Маммография» и «Рентгенодиагностика». Размещается на базе транспортного средства АЛ-59860С-2.
4. Комплекс «Стоматология» состоит кабинетов: «Стоматология». Размещается на базе транспортного средства АФ-47434А.
5. Комплекс «Офтальмология» состоит из кабинетов: «Офтальмология». Размещается на базе транспортного средства АФ-371703.
6. Комплекс «Фельдшерско-акушерский пункт» состоит из кабинетов: «Диагностика» и «Женское здоровье». Размещается на базе транспортного средства 878913, 185514 или 692732.
7. Комплекс «Флюорография» состоит из кабинетов: «Рентгенодиагностика». Размещается на базе транспортного средства 385527 или ПМК-48415К.
8. Комплекс «Маммография» состоит из кабинетов: «Маммография». Размещается на базе транспортного средства ПМК-48415К.

2.2 Основные технические характеристики Комплекса приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики Комплекса

Наименование параметра	Норма
Напряжение питающей сети переменного тока частотой 50 Гц, В	220/380
Бортовая электросеть постоянного тока, В	12/24
Аккумуляторные батареи аварийного электропитания, А·ч	100
Кабель для подключения к внешней питающей сети переменного тока, не менее м	15
Система отопления: - конвекционные обогреватели, не менее кВт - тепловая завеса, не менее кВт - автономный воздушный отопитель на	0,5 1

дизельном топливе, не менее кВт	2
Система водоснабжения и личной гигиены: - емкость для чистой воды, л - насосная станция, л - электроводонагреватель, кВт - емкость для использованной воды, л	от 5 до 250 от 5 до 10 до 5 от 10 до 350

Масса комплекса, как снаряженного транспортного средства (без груза) и полная масса транспортного средства (с грузом) должна соответствовать Таблице 2.2. Допускаемое превышение любой массы должно быть не более 3 %, нижний предел масс не ограничивается.

Таблица 2.2.

Вариант исполнения	Снаряженная масса, кг	Полная масса, кг
Диспансеризация АМС-49415Н	12500	16000
VFM6АО	15100	25000
ПМК-48415Н	12500	16000
Профосмотр 972200	14000	39000
Лучевая диагностика АЛ-59860С-2	13500	16500
Стоматология АФ-47434А	3615	5650
Офтальмология АФ-371703	2500	3500
Фельдшерско-акушерский пункт 878913	3300	3500
185514	2960	3500
692732	16900	18800
Флюорография 385527	7300	8700
ПМК-48415К	9000	9500
Маммография ПМК-48415К	9000	9500

Габаритные размеры каждого Комплекса должны соответствовать данным, указанным в Таблице 2.3 и на схемах в Приложении В. Допускаемое отклонение от линейных размеров не должно превышать ± 5 %.

Таблица 2.3.

Вариант исполнения	Габаритные размеры с учетом шасси (без учета шасси), мм:		
	Длина	Ширина	Высота
Диспансеризация АМС-49415Н	10417 (8000)	2550	3900 (2620)
VFM6АО	10417 (8000)	2550	3900 (2620)
ПМК-48415Н	10417 (8000)	2550	3900 (2620)
Профосмотр 972200	15500 (15500)	2550	3900 (2620)
Лучевая диагностика АЛ-59860С-2	9992 (7500)	2550	3900 (2620)
Стоматология АФ-47434А	7890 (6000)	2300	3380 (2400)
Офтальмология АФ-371703	6535 (3800)	2200	3450 (2300)

Фельдшерско-акушерский пункт 878913 185514 692732	5800 (5000) 6088 (3565) 9015(6170)	2200 2206 2470	3200 (2400) 2720 (2200) 3900 (2500)
Флюорография 385527 ПМК-48415К	7400 (4490) 7500 (6200)	2400 (2040) 2450 (2550)	3150 (1900) 3700 (2530)
Маммография ПМК-48415К	7500 (6200)	2450 (2550)	3700 (2530)

2.3 Каждый Комплекс оснащен комплектом систем автономного жизнеобеспечения:

- системой электроснабжения от автономных источников питания, таких как: генераторная установка, аккумуляторные батареи; преобразователь напряжения 24(12)DC/220AC В;
- системами приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования;
- системой противопожарной защиты с пультом управления, комплектом датчиков и звуковым оповещателем.

2.4 Материалы поверхностей, предполагающие контакт с телом пациента и медперсонала, изготавливаются из следующих материалов:

Наименование материала	НТД или марка материала	Изготовитель	Применение
Декоративный бумажно-слоистый пластик	Марка ДБСП ТГ 2/03/С	ООО «Вышневолоцкий МДОК», Россия	Отделочные материалы
Алюминий	Марка АД31	ООО «Уральская Горно-Металлургическая Компания», Россия	Алюминиевый профиль
Резина	Марка ПР-632	АОЗТ «МОСДИЗАЙНМАШ», Россия	Уплотнение стыковых соединений
Кожа искусственная	Марка ЕСО, состав: Тик 85, полиуретан СКУ 7Л	ООО «Чеховские мануфактуры», Россия	Обшивка стульев
Нержавеющая сталь	06ХН28МДТ	ЗАО «ВЗПС», Россия	Мойка
Алюминий	профиль алюминиевый марки 6060	ООО «Красноярский Металлургический Завод», Россия	Алюминиевый уголок
Композит, армированный стекловолокном Optiplan Polydet Perfomance	Покрытие «гелькоут», стекломат, UP-смола	OPTIPLAN GmbH, Германия	Сэндвич панели
Коммерческий линолеум	Марка ПВХ-С-7058 М	АО «ТАРКЕТТ», Россия	Напольное покрытие

3. СОСТАВ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплекс состоит из (выделяется знаком«х»или«√»):

1. Базовое транспортное средство:

- ☐ AMC-49415H
- ☐ VFM6AO
- ☐ ПМК-48415H
- ☐ 972200
- ☐ АЛ-59860С-2
- ☐ АФ-47434А
- ☐ АФ-371703
- ☐ 878913
- ☐ 185514
- ☐ 692732
- ☐ 385527
- ☐ ПМК-48415К

• Перечень медицинского и специального оборудования:

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
Медицинское оборудование				
Кабинет «Диагностика»				
1.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)	1	При необходимости
2.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)	1	При необходимости
3.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836)	1	При необходимости
4.	Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005	Производство: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (ФСР 2010/08890)	1	При необходимости
5.	Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003	Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2008/02305)	1	При необходимости
6.	Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004	Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (РЗН 2014/1928)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
7.	Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями, вариант исполнения: S8Exp	Производство: "СОНОСКЕЙП МЕДИКАЛ КОРП.", Китай (РЗН 2013/1328)	1	При необходимости
8.	Прибор цифровой ультразвуковой диагностический М5 с принадлежностями	Производство: «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР (ФСЗ 2008/01996)	1	При необходимости
9.	Прибор ультразвуковой диагностический М7 с принадлежностями	Производство: "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2010/07629).	1	При необходимости
10.	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго Е-200	Производство: "Сентек Корея Корп.", Корея (РЗН 2014/1689)	1	При необходимости
11.	Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR с принадлежностями, модель: Spirolab III, Spirolab I	Производство: «МИР С.р.л. – МЕДИКАЛ ИНТЕРНЕШНЛ РИСЕРЧ», Италия (РЗН 2017/5323)	1	При необходимости
12.	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентилиционной способности легких "Спиро-Спектр" с принадлежностями по ТУ 9441-019-13218158-2004	Производство: ООО "Нейрософт", Россия (РЗН 2015/3040)	1	При необходимости
13.	1 Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, модель ВМЭН-150	Производство: ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/09964)	1	При необходимости
14.	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш" по ТУ 4274-021-00226454-2002	Производство: ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия (ФСР 2011/11958)	1	При необходимости
15.	Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M6, OMRON M3 Expert	Производство: OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2012/12100)	1	При необходимости
16.	Тонмометр механический с принадлежностями, вариант исполнения: big ben	Производство: "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2012/11768)	1	При необходимости
17.	Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEFI-B (M110)	Производство: Метракс ГмбХ, Германия (ФСЗ 2011/10093)	1	При необходимости
18.	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 "АКСИОН" по ТУ 9444-162-07530936-2008	Производство: ООО Концерн "Аксион", Россия (ФСР 2008/03509)	1	При необходимости
19.	Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения buck, C-128 Гц	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2010/08456)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
20.	Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, дерматоскоп gi-degma	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2009/03906)	1	При необходимости
21.	Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках и принадлежности к ним, модели rep-score, gi-score L	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2009/03905)	1	При необходимости
22.	Система скрининга сердца компьютерная "Кардиовизор"	Производство: ООО «Медицинские компьютерные системы», Россия (ФСР 2007/00155)	1	При необходимости
23.	Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-«Р-Д» по ТУ 9441-005-24149103-2003	Производство: ООО «НПП «Монитор», Россия (ФСР 2012/14015)	1	При необходимости
24.	Электрокардиограф компьютерный "Поли-Спектр-8/ЕХ" по ТУ 26.60.12-017-13218158-2018	Производство: ООО "Нейрософт", Россия (ФСР 2009/05172)	1	При необходимости
25.	Электрокардиограф: FX-2111, FCP-2155, FX-3010, FX-7102, FCP-7101, FX-7302, FX-7202, FX-7402, модель FX-7102, FCP-7101	Производство: «Фукуда Дэнси Ко., Лтд.», Япония (РЗН 2016/4703)	1	При необходимости
26.	Электрокардиограф CardiMax с принадлежностями, исполнение: FX-8222	Производство: ФУКУДА ДЭНСИ Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2011/11379)	1	При необходимости
27.	Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12ТМ "Альтон" по ТУ 9441-101-14154244-2013, с принадлежностями	Производство: ООО "Альтомедика", Россия. (РЗН 2013/809)	1	При необходимости
28.	Электрокардиограф "ЭКГ" по ТУ 9441-001-74487176-2010	Производство: ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2010/08659)	1	При необходимости
29.	Дефибриллятор-монитор Dixon с принадлежностями	Производство: "КУ Медикал Системс, Инк.", Республика Корея (ФСЗ 2011/08889)	1	При необходимости
30.	Комплекс компьютерный полиграфической регистрации биопотенциалов по ТУ 9441-006-12152519-2011, исполнение: Система электроэнцефалографическая "Компакт-нейро"	Производство: ООО НМФ «Нейротех», Россия (ФСР 2011/11685)	1	При необходимости
31.	Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения Cardiophon, Duplex de luxe	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2012/12207)	1	При необходимости
32.	Стетоскоп Littmann вариант исполнения Littman classic 3 с принадлежностями	Производство: ЗМ Компани", Россия (РЗН 2016/4622)	1	При необходимости
33.	Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РЭП	Производство: ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/11607)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
34.	Маммограф электроимпедансный компьютерный для скринингового обследования молочной железы "МЭИК"® по ТУ 9442-001-21702999-2013	Производство: ООО ПКФ «Современная импедансная медицинская техника», Россия (РЗН 2014/2264)	1	При необходимости
35.	Угломер ортопедический по ТУ 9452-162-01894927-2005	Производство: ФГУП «ЦИТО», Россия (ФСР 2010/07249)	1	При необходимости
36.	Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 четырех исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм	Производство: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (ФСР 2010/07335)	1	При необходимости
37.	Рефлектор лобный оториноларингологический по ТУ 9434-001-44942795-2005	Производства: ООО «Полимерные изделия», Россия (ФСР 2010/07935)	1	При необходимости
38.	Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ	Производство: АО «Елатомский приборный завод», Россия (РЗН 2015/2997)	1	При необходимости
39.	Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-004-78939528-2009	Производство: ООО «Компания «ЭЛТА», Россия (ФСР 2009/06498)	1	При необходимости
40.	Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных осмотров "МЕДРЕГИСТР" по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017	Производство: Общество с ограниченной ответственностью "САНРЭС", Россия (РЗН 2019/8513)	1	При необходимости
41.	Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007, исполнение АДР-МП-В, АДР-МП-Д	Производство: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (ФСР 2007/00439)	1	При необходимости
42.	Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН" по ТУ 9441-006-26458937-01, исполнение: ВТ-02-1-м 2 (модификация 2)	Производство: ООО «Научно-Медицинская Фирма МБН», Россия (ФСР 2011/10954)	1	При необходимости
43.	Аудиометр автоматизированный АА-02 по ТУ 9441-001-23115390-2011	Производство: ЗАО «Биомедилен», Россия (ФСР 2011/11116)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
44.	Аудиометры скрининговые, с принадлежностями	Производство: «МАЙКО» Диагностикс ГмбХ», Германия (РЗН 2013/489)	1	При необходимости
45.	Негатоскопы общего назначения НР- "ПОНИ" по ТУ 9452-011-17459079-2011, исполнение: Негатоскопы общего назначения НР1-01	Производство: ЗАО "Приборы и оборудование для научных исследований", Россия (ФСР 2011/10889)	1	При необходимости
46.	Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и поддержанием температуры инфузионных растворов ТК- "Медплант" по ТУ 9452-009-52777873-2011	Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2012/13047)	1	При необходимости
47.	Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-2 по ТУ ППТД.2955.008	Производство: ООО Пневмоприбор, Россия (ФСР 2009/ 06204)	1	При необходимости
48.	Ингалятор кислорода КИ-5 по 9В2.933.227ТУ	Производство: АО "КАМПО", Россия (ФСР 2011/09914)	1	При необходимости
49.	Аптечка первой помощи Анти-СПИД - "ВИТАЛФАРМ" по ТУ 9398-022-85535470-2014, модель: «Аптечка первой помощи Анти-СПИД для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад» тип 1 - «ВИТАЛФАРМ»	Производство: ЗАО "Виталфарм", Россия (РЗН 2015/2519)	1	При необходимости
50.	Набор для минитрахеостомии	Производство: "Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед" ФСЗ № 2009/05211	1	При необходимости
51.	Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01	Производство: ООО Научно-производственная фирма «Дентофлекс», Россия (ФСР 2008/03499)	1	При необходимости
52.	Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С	Производство: АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585)	1	При необходимости
53.	Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in	Производство: Биокемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия (ФСЗ 2011/10072)	1	При необходимости
54.	Комплект мониторов компьютеризированных носимых одно-, двух-, трехсуточного мониторингирования ЭКГ, АД, ЧП КМкн-«СОЮЗ»-«ДМС» по ТУ 9441-001-46816787-2004	Производство: ООО "ДМС Передовые Технологии", Россия (РЗН 2014/1478)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
55.	Пульсоксиметр медицинский 'Armed', варианты исполнения: YX300, YX301	Производство: "Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2010/07461)	1	При необходимости
56.	Набор диагностический с принадлежностями	Производство: "КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ" (РЗН 2019/8258)	1	При необходимости
57.	Дерматоскопы и наборы диагностические: KaWe Piccolight D, KaWe Eurolight D 30 в комплекте	Производство: "КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ" (РЗН 2015/2924)	1	При необходимости
58.	Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения; глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11А	Производство: ООО "Биосенсор АН", Россия (ФСР 2008/02809)	1	При необходимости
59.	Набор реагентов для определения скрытой крови (FOB) в образцах кала человека методом иммунохроматографии (в полосках и кассетах)	Производство: ЭЙБОН Биофарм (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай (РЗН 2016/4086)	1	При необходимости
60.	Тест-полоски MULTICHEK для определения в моче параметров и веществ (от 1 до 15)	Производство: "АйЭнДи Диагностик Инк.", Канада (ФСЗ 2010/07039)	1	При необходимости
61.	Тест иммунохроматографический для выявления гемоглобина в кале (скрытая кровь) «РЭД»	Производство: ООО "РЭД", Россия, (ФСР 2012/13624)	1	При необходимости
62.	Кресло Барани по ТУ 32.50.50-001-61593132-2018	Производство: ООО "Медтехпром+", Россия (РЗН 2018/7299)	1	При необходимости
63.	Стойка медицинская марки «КМ-Магма» в исполнении – стойка медицинская приборная СПз-03	Производство: ООО НПФ Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03971)	2	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
64.	Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС"	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2009/05705)	1	При необходимости
65.	Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»	Производство: ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089)	1	При необходимости
66.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	Производство: ООО Научно-производственная фирма «Костромская медтехника», Россия (ФСР 2008/03973)	Не более 2	При необходимости
67.	Стол� медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)	Не более 2	При необходимости
Кабинет «Офтальмология»				
1.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)	1	При необходимости
2.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
3.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836)	1	При необходимости
4.	Авторефкератометр с принадлежностями	Производство: "Хувитц Ко., Лтд", Республика Корея (ФСЗ 2012/12458)	1	При необходимости
5.	Прибор оптический диагностический: офтальмоскоп с принадлежностями, вариант исполнения gi-score L	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ энд Ко. КГ», Германия (ФСЗ 2012/13162)	1	При необходимости
6.	Прибор оптический диагностический: отоскоп с принадлежностями, вариант исполнения e-score	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ энд Ко. КГ», Германия (ФСЗ 2012/13250)	1	При необходимости
7.	Приборы оптические диагностические для оториноларингологии и принадлежности к ним, вариант исполнения gi-score L	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ энд Ко. КГ», Германия (ФСЗ 2009/03908)	1	При необходимости
8.	Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями, вариант исполнения гибкий осветитель gi-magic LED	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2012/12398)	1	При необходимости
9.	Бесконтактный тонометр FT-1000 с принадлежностями	Производство: «Томи ГмбХ», Германия (ФСЗ 2008/01687)	1	При необходимости
10.	Авторефкератометр RC-5000 с принадлежностями	Производство: «ТОМЕЙ Корпорейшн», Япония (РЗН 2015/2726)	1	При необходимости
11.	Проектор знаков экранный офтальмологический TCP, с принадлежностями, варианты исполнений: TCP-3000 P	Производство: Томэй ГмбХ, Германия (ФСЗ 2010/07992)	1	При необходимости
12.	Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 по ТУ 9442-002-39589405-2002	Производство: ООО МРП «Техноаргус», Россия (ФСР 2007/00950)	1	При необходимости
13.	Щелевая лампа офтальмологическая ручная модели XL-1 в комплекте с принадлежностями	Производство: «Рексам Ко., Лтд.», Япония (РЗН 2016/4151)	1	При необходимости
14.	Лампа щелевая офтальмологическая TSL-5000 с принадлежностями	Производство: «Томэй ГмбХ», Германия (ФСЗ 2011/11147)	1	При необходимости
15.	Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 по ТУ 9442-001-39589405-2002	Производство: ООО МРП «Техноаргус», Россия (ФСР 2007/00471)	1	При необходимости
16.	Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ	Производство: АО «Елатомский приборный завод», Россия (РЗН 2015/2997)	1	При необходимости
17.	Периметр автоматический офтальмологический AP-3000 с принадлежностями	Производство: Томэй ГмбХ, Германия (ФСЗ 2011/09934)	1	При необходимости
18.	Проектор знаков офтальмологический "ОПТИОНИКС®" (OPTIONIX®) по ТУ 26.60.12-011-37600580-2020	Производство: ЗАО НПО Медкар, Россия (РЗН 2020/10607)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
19.	Анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения компьютеризированный АПЗ-30/50/100-«ПЕРИТЕСТ» по ТУ 9442-002-11432330-2003	Производство: ИП Гуров Андрей Сергеевич, Россия (ФСР 2012/13976)	1	При необходимости
20.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	Производство: ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973)	Не более 2	При необходимости
21.	Столбы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)	Не более 2	При необходимости
Кабинет «Женское здоровье»				
1.	Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01	Производство: ООО Научно-производственная фирма «Дентофлекс», Россия (ФСР 2008/03499)	1	При необходимости
2.	Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 по ТУ 9452-021-07614107-2004	Производство: АО «Досчатинский завод медицинского оборудования», Россия (ФСР 2010/07065)	1	При необходимости
3.	Кресло гинекологическое «Грейс» по ТУ 9452-008-74487176-2011	Производство: ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2011/10927)	1	При необходимости
4.	Кольпоскоп КС-02 по ТУ 26.70.22-009-52132018-2018	Производство: ООО «Здоровый Мир», Россия (РЗН 2019/8462)	1	При необходимости
5.	Маммограф электроимпедансный компьютерный для скринингового обследования молочной железы "МЭИК"® по ТУ 9442-001-21702999-2013	Производство: ООО ПКФ «Современная импедансная медицинская техника», Россия (РЗН 2014/2264)	1	При необходимости
6.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
7.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)	1	При необходимости
8.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836)	1	При необходимости
9.	Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения Cardiophon, Duplex de luxe	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2012/12207)	1	При необходимости
10.	Стетоскоп Littmann вариант исполнения Littman classic 3 с принадлежностями	Производство: "ЗМ Компани", Россия (РЗН 2016/4622)	1	При необходимости
11.	Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 четырех исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм	Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2010/07335)	1	При необходимости
12.	Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с принадлежностями, вариант исполнения: М9	Производство: «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР (РЗН 2017/6115)	1	При необходимости
13.	Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»	Производство: ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089)	1	При необходимости
14.	Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный "Ева" по ТУ 9437-045-44942795-2009	Производство: ООО "Полимерные изделия", Россия (ФСР 2010/07047)	1	При необходимости
15.	Стетоскоп акушерский деревянный Сад «М-МИЗ» по ТУ 9398-093-07613473-2003,	Производство: Можайский МИЗ, Россия (ФСР 2007/00787)	1	При необходимости
16.	Тест-полоски MULTICHECK для определения в моче параметров и веществ (от 1 до 15)	Производство: "АйЭнДи Диагностика Инк.", Канада (ФСЗ 2010/07039)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
17.	Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С	Производство: АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585)	1	При необходимости
18.	Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в следующих исполнениях: - КДС-1; - КДС-3; - КДС-5; - КДС-6; - КДС-6Л-1К; - КДС-6Л-2К; - КДС-10; - КДС-11; - КДС-20; - КДС-30; - КДС-35; - КДС-0,1; - КДС-0,2, исполнение КДС-3	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2009/06144)	1	При необходимости
19.	Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСР-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004	Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (РЗН 2014/1928)	1	При необходимости
20.	Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003	Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2008/02305)	1	При необходимости
21.	Набор для минитрахеостомии	Производство: "Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед" (ФСЗ № 2009/05211)	1	При необходимости
22.	Термометр медицинский электронный OMRON Eco Temp (MC-203-E)	Производство: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd, Япония (ФСЗ 2009/03887)	1	При необходимости
23.	Кресло донорское с управляемым наклоном и штативом КДн-«Диакомс» для размещения донора при взятии крови (угол наклона спинки от 20 до 30 градусов) по ТУ 9452-049-17099103-2002	Производство: ООО "Диакомс" Россия (ФСР 2012/13320)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
24.	Стулья медицинские марки «КМ-Мagma» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	Производство: ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973)	Не более 2	При необходимости
25.	Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)	Не более 2	При необходимости
Кабинет «Стоматология»				
1	Ванны ультразвуковые электромеханические однокамерные для дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских инструментов "УльтразЭст" по ТУ 9451-008-56755207-2009, модель: "УльтразЭст-М" УВ-3	Производство: ЗАО «Геософт Дент», Россия (ФСР 2007/00048)	1	При необходимости
2	Стерилизатор мелких стоматологических инструментов электрический со стеклянными шариками СС-01 "ТермоЭст" по ТУ 9451-001-56755207-2005, модель: - "Термоэст"	Производство: ЗАО «Геософт Дент», Россия (ФСР 2010/08560)	1	При необходимости
3	Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С	4 Производство: 5 АО "Елатомский приборный завод", Россия 6 (РЗН 2016/3585)	1	При необходимости
7	Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-3, КФ-6, КФ-9, КФ-12, КФ-18, по ТУ 9451-018-07614107-2002 и сменные части: фильтры, исполнение: КФ-3	8 Производство: 9 АО "Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия 10 (ФСР 2010/07067)	1	При необходимости
11	Компрессор воздушный поршневой стоматологический КС-60-01 "Стомэл" по ТУ 9452-003-26502549-00	Производство: ООО «СТОМЭЛ-К», Россия (ФСР 2009/05060)	1	При необходимости
12	Установка стоматологическая STOMADENT HARMONY с принадлежностями	Производство: «СТОМАДЕНТ СК с.р.о.», Словакия (ФСЗ 2008/02141)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
13	Установка стоматологическая STOMADENT IMPULS с принадлежностями	Производство: «СТОМАДЕНТ СК с.р.о.», Словакия (ФСЗ 2008/02142)	1	При необходимости
14	Датчик цифровой дентальный интраоральный RIOSensor модель Ris500	Производство: "Рэй Ко., Лтд.", Корея (РЗН 2018/7470)	1	При необходимости
15	Аппарат рентгеновский стоматологический Evolution X3000 2C/1 с принадлежностями	Производство: "Нью Лайф Радиолоджи С.р.Л", Италия (ФСЗ 2008/02002)	1	При необходимости
16	Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных медицинских инструментов-"СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010, исполнение: "СПДС-3-К"	Производство: ООО "СПДС", Россия (ФСР 2010/09347)	1	При необходимости
17	Аппарат рентгеновский дентальный MAX 70 HF/DC с принадлежностями	Производство: "ЦСН Индастри С.р.л.", Италия (РЗН 2017/5415)	1	При необходимости
18	Визиограф стоматологический Rx 2 с принадлежностями	Производство: "ЦСН Индастри С.р.л.", Италия (РЗН 2017/5414)	1	При необходимости
19	Аппараты для локализации апикального сужения корневого канала зуба по ТУ 9452-005-56755207-2016, вариант исполнения: «ЭндоЭст-3Д»	Производство: ЗАО «Геософт Дент», Россия (ФСР 2007/00078)	1	При необходимости
20	Установка предстерилизационной очистки и смазки стоматологических наконечников: Assistina 301 Plus, с принадлежностями	Производство: "Ви унд Ха Дентал Верк Бюрмоос ГмбХ", Австрия (РЗН 2017/5826)	1	При необходимости
21	Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение: ГП-20 СПУ	Производство: ОАО "Смоленское СКТБ СПУ", Россия (ФСР 2010/07332)	1	При необходимости
22	Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС"	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2009/05705)	1	При необходимости
23	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)	1	При необходимости
24	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
25	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	Производство: АО "ПОЗиС", Россия (ФСР 2012/13836)	1	При необходимости
26	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	Производство: ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973)	Не более 2	При необходимости
27	Столбы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)	Не более 2	При необходимости
Кабинет «Лаборатория»				
1.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)	1	При необходимости
2.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)	1	При необходимости
3.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	Производство: АО "ПОЗиС", Россия (ФСР 2012/13836)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
4.	Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в следующих исполнениях: - КДС-1; - КДС-3; - КДС-5; - КДС-6; - КДС-6Л-1К; - КДС-6Л-2К; - КДС-10; - КДС-11; - КДС-20; - КДС-30; - КДС-35; - КДС-0,1; - КДС-0,2, исполнение КДС-1	28 Производство: 29 АО «КРОНТ-М», Россия 30 (ФСР 2009/06144)	1	При необходимости
5.	Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» по ТУ 9452-037-11769436-2010	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/10034)	1	При необходимости
6.	Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С	Производство: АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585)	1	При необходимости
7.	Анализатор крови биохимический портативный, модели: CardioChek, CardioChek PA, с принадлежностями, модель: CardioChek PA	Производство: «Полимер Технолоджи Системс, Инк.», США (РЗН 2015/2693)	1	При необходимости
8.	Анализаторы биохимические "ТОРУС" по ТУ 9443-013-74487176-2007	Производство: ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2007/00674)	1	При необходимости
9.	Анализаторы гематологические автоматические "ГЕМАЛАЙТ" по ТУ 9443-011-74487176-2007	Производство: ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2007/00675)	1	При необходимости
10.	Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in	Производство: Биокемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия (ФСЗ 2011/10072)	1	При необходимости
11.	Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active) с принадлежностями	Производство: "Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Германия (ФСЗ 2007/00817)	1	При необходимости
12.	Анализаторы мочи CL-50 Plus, CL-500 с принадлежностями, модель: CL-50 Plus	Производство: «Хай Текнолоджи, Инк.», США (РЗН 2016/3986)	1	При необходимости
13.	Пробирки для взятия крови "Проба", вариант исполнения: Пробирки с активатором свертывания	Производство: «Ченгду Рич Сайенс Индастри Ко., Лтд.», Китай (ФСЗ 2010/06301)	1	При необходимости
14.	Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения: MicroCC-20Plus	Производство: «Хай Текнолоджи, Инк.», США (ФСЗ 2010/07756)	1	При необходимости
15.	Центрифуга лабораторная медицинская настольная "Armed"	Производство: "Зенит Лаб (Цзянсу) Ко., Лтд.", Китай (РЗН 2020/10939)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
16.	Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини)	Производство: 77 Электроника Кфт, Венгрия (РЗН 2019/9342)	1	При необходимости
17.	Анализатор гематологический V-Counter (В-Каунтер) с принадлежностями	Производство: Вест Медика Продукционс- унд Хайдельс-ГмбХ, Австрия (РЗН 2017/5740)	1	При необходимости
18.	Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) CUBE 30 Touch (КУБ 30 ТАЧ), с принадлежностями	Производство: «Диессе Диагностика Сенезе С.п.А.», Италия (РЗН 2019/9149)	1	При необходимости
19.	Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, модель: ГП-10 МО	Производство: АО «Государственный Рязанский приборный завод», Россия (ФСР 2011/10267)	1	При необходимости
20.	Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»	Производство: ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089)	1	При необходимости
21.	Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС"	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2009/05705)	1	При необходимости
22.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	Производство: ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973)	2	При необходимости
23.	Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)	2	
Кабинет «Маммография»				

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
1.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)	1	При необходимости
2.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)	1	При необходимости
3.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836)	1	При необходимости
4.	Комплекс рентгеновский маммографический цифровой МАДИС по ТУ У 33.1-14309534-118-2003, с принадлежностями	Производство: Фирма «Радмир» ДП АО НИИРИ, Украина (РЗН 2014/2046)	1	При необходимости
5.	Маммограф рентгеновский «Маммо-4-«МТ» по ТУ 9442-036-47245915-2011 с принадлежностями	Производство: ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия (ФСР 2008/02328)	1	При необходимости
6.	Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016	Производство: ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия (РЗН 2017/5930)	1	При необходимости
7.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	Производство: ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973)	Не более 2	При необходимости
8.	Стол медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)	Не более 2	При необходимости
Кабинет «Рентгенодиагностика»				

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
1.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)	1	При необходимости
2.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)	1	При необходимости
3.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836)	1	При необходимости
4.	Флюорограф цифровой малодозовый "ФЦМ-Альфа" по ТУ 9442-022-17459079-2009, исполнение: "ФЦМ-Альфа 2К"	Производство: ЗАО «Приборы и оборудование для научных исследований», Россия (ФСР 2009/05372)	1	При необходимости
5.	Аппарат рентгеновский палатный передвижной «МобиРен-4МТ-А» по ТУ 9442-054-47245915-2016, исполнение: «МобиРен-4МТ-А»-02	Производство: Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд", Россия (РЗН 2017/6074)	1	При необходимости
6.	Аппарат рентгеновский цифровой палатный передвижной «Р-500 «Мобикомпакт» по ТУ 9442-053-47245915-2016	Производство: Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд", Россия (РЗН 2017/6289)	1	При необходимости
7.	Ширма рентгенозащитная цельнометаллическая свинцовая по ТУ 9452-009-17459079-2002, исполнение: ШРБ1-"ПОНИ"	Производство: ЗАО «ПОНИ», Россия (ФСР 2011/11811)	1	При необходимости
8.	Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИС3-"РЕНЕКС" по ТУ 9398-010-21009821-2004	Производство: ЗАО "РЕНЕКС", Россия (ФСР 2008/03184)	6	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
9.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	Производство: ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973)	Не более 2	При необходимости
10.	Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)	Не более 2	При необходимости
Транспортное средство				
1.	АМС-49415Н	Производство: ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия	1	При необходимости
2.	ПМК-48415Н	Производство: ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия	1	При необходимости
3.	972200	Производство: ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия	1	При необходимости
4.	АЛ-59860С-2	Производство: ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия	1	При необходимости
5.	АФ-47434А	Производство: ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия	1	При необходимости
6.	АФ-371703	Производство: ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия	1	При необходимости
7.	ПМК-48415К	Производство: ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия	1	При необходимости
8.	VFM6AO	Производство: ООО «РусКомТранс», Россия	1	При необходимости
9.	878913	Производство: ООО «Форвард», Россия	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
10.	185514	Производство: ООО «Форвард», Россия	1	При необходимости
11.	692732	Производство: ПАО «КОМЗ», Россия	1	При необходимости
12.	385527	Производство: ООО «Форвард», Россия	1	При необходимости
Специальное оборудование				
1.	Независимый воздушный и жидкостный отопитель Air Top EVO 55	Производство: «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия	Не более 2	При необходимости
2.	Воздушный отопитель AER D5	Производство: «A100», Китай	Не более 2	
3.	Воздушный отопитель модели: Airtronic D4	Производство: Eberspacher Climat Control Systems GmbH & Co. KG., Германия	Не более 2	При необходимости
4.	Промышленная воздушная завеса, модель: M3	Производство: ООО «ТРОПИК ЛАЙН», Россия	не более 2	При необходимости
5.	Воздушная завеса Арктос Мини-3	Производство: ООО «Арктос», Россия	не более 2	При необходимости
6.	Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB	Производство: “MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD.”, Сингапур	Не более 2	При необходимости
7.	Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель <u>MSMAAU-07HRDN1 / MOBA03-07HFN1</u>	Производство: Midea Group, Китай	Не более 2	При необходимости
8.	Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель M30G-21HFN8-Q	Производство: Midea Group, Китай	Не более 2	При необходимости
9.	Сплит-система т.м. «Dometic»	Производство: “Dometic Italy S.p.a.”, Италия	1	При необходимости
10.	Мульти-сплит система Royal Clima 3RGR-24HN/OUT + 3	Производство: « <u>Royal Clima</u> », Китай	Не более 2	При необходимости
11.	Мульти-сплит система Haier 3U19FS1ERA(N)	Производство: «Haier» Китай	Не более 2	При необходимости
12.	Мульти-сплит система HAIER 4U75S2SR5FA	Производство: «Haier» Китай	Не более 2	При необходимости
13.	Мульти-сплит система HISENSE AMW4-28U4SAC	Производство: «Hisense» Китай	Не более 2	При необходимости
14.	Мульти-сплит система HISENSE AMW2-14U4SRE	Производство: «Hisense» Китай	Не более 2	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
15.	Мульти-сплит система Royal Clima 3RFM-14HN	Производство: «Royal Clima», Китай	Не более 2	При необходимости
16.	Мульти-сплит система HAIER 2U40S2SM1FA	Производство: «Haier» Китай	Не более 2	При необходимости
17.	Мульти сплит-система, Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER1*3 / MXZ-3HJ50VA ER1	Производство: Mitsubishi Electric Corporation, Тайланд	Не более 2	При необходимости
18.	Накрышный кондиционер Webasto cool top trail	Производство: «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия	1	При необходимости
19.	Электрический кондиционер Autoclima	Производство: AUTOCLIMA, Италия	1	При необходимости
20.	Электрические аппараты бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: сплит-системы, серия (тип): GC , универсальные блоки, серии (тип) GU	Производство: «General Climate LTD», Китай	Не более 2	При необходимости
21.	Система кондиционирования Mitsubishi Electric в составе наружный блок MXZ + Внутренний блок MSZ	Производство: Mitsubishi Electric Corporation, Япония	Не более 2	При необходимости
22.	Электрогенераторная установка с маркировкой «ELEMEX», модели: SH6500EX, SH11000, SH7600EX	Производство: «SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD», Япония	1	При необходимости
23.	Дизель-генератор, т.м. «Kubota», модель: J116	Производство: «Kubota Corporation», Япония	1	При необходимости
24.	Дизельный генератор «TOYO», модель TKV-20SPC	Производство: «TOYO DENKI INDUSTRIAL CO.,LTD» Япония	1	При необходимости
25.	Генератор бензиновый инверторный ЗИГ-3500	Производство: ЗАО “Зубр ОБК”, Россия	1	При необходимости
26.	Генератор Fubag TI 4300	Производство: “Fubag”, Германия	1	При необходимости
27.	Бензиновый генератор Denzel GT-2600i (2300 Вт)	Производство: “MATRIZE Handels GmbH”, Германия.	1	При необходимости
28.	Бензиновый генератор «Energo», Модели: EB7.0/230-YLE, EB7.0/230-HLE, EB 14.0/230-YLE	Производство: «Energo» Россия	1	При необходимости
29.	Бензиновый генератор Briggs&Stratton модель: Elite 8500EA	Производство: «Briggs & Stratton» США	1	При необходимости
30.	Бензиновый генератор Yamaha Модель: EF 7200 E	Производство: «Yamaha», Китай, Япония	1	При необходимости
31.	Бензиновый генератор ZONGSHEN модели: PB 7000 E, KB 7000 E, KB 9000 E, PB 12000E, PB 15000 E	Производитель: «ZONGSHEN INDUSTRIAL GROUP CO., LTD», Китай	1	При необходимости
32.	Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа, т.м. «Noirot», модель Spot E-4	Производство: «Noirot S.A.S.», Франция	не более 8	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
33.	Электрический конвектор «Kalashnikov» модели: KVCH-E10E-11, KVCH-E10M-11	Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия	не более 8	При необходимости
34.	Электрический конвектор «Ballu», модели: BEC/EVE-1000, Enzo BEC/EZER-1000, Ettore BEC/ETER-1000, BEC/SEM-1000, BEC/HMM1000	Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия	не более 8	При необходимости
35.	Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса электрическая стационарная, т.м. «Ballu», модель ВНС-L08-T03, ВНС-L05S02-S	Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия	не более 2	При необходимости
36.	Прибор приемно-контрольный охранный, модель Кварц вариант 2	Производство: ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия	1	При необходимости
37.	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный «Версет», модели: ВС-ПК ВЕКТОР-116, ВС-ПК ВЕКТОР-120	Производство: ООО «Версет», Россия	1	При необходимости
38.	Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12000Н/1-Ц	Производство: «Ресанта», Китай	1	При необходимости
39.	Многофункциональный автономный преобразователь энергии МАП SINE, модель PRO	Производство: ООО «МикроАрт», Россия	1	При необходимости
40.	Установка вентиляционная, модель Breezart	Производство: ООО «КЛИМАТСОФТ», Россия	1	При необходимости
41.	Вентилятор промышленный, модель VANVENT	Производство: ООО «ВАНВЕНТ», Россия	1	При необходимости
42.	Окно рентгенозащитное «TISSA» TY BY 600091320/003-2006	Производство: ООО «ТИССА», Республика Беларусь	не более 2	При необходимости
43.	Биотуалет Thetford Porta Potti	Производство: “Thetford”, Нидерланды	не более 2	При необходимости
44.	Независимый воздушный и жидкостный отопитель Air Top EVO 55	Производство: «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия	1	При необходимости
45.	Воздушный отопитель модели: Airtronic D4	Производство: Eberspacher Climat Control Systems GmbH & Co. KG., Германия	1	При необходимости
46.	Промышленная воздушная завеса, модель: МЗ	Производство: ООО «ТРОПИК ЛАЙН», Россия	не более 2	При необходимости
47.	Воздушная завеса Арктос Мини-3	Производство: ООО “Арктос”, Россия	не более 2	При необходимости
48.	Холодильник BBK, RF-068	Производство: BBK Electronics LTD, КНР	не более 2	При необходимости
49.	Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB	Производство: “MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD.”, Сингапур	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
50.	Сплит-система т.м. «Dometic»	Производство: «Dometic Italy S.p.a.», Италия	1	При необходимости
51.	Накрышный кондиционер Webasto cool top trail	Производство: «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия	1	При необходимости
52.	Электрический кондиционер Autoclima	Производство: AUTOCLIMA, Италия	1	При необходимости
53.	Электрические аппараты бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: сплит-системы, серия (тип): GC, универсальные блоки, серии (тип) GU	Производство: «General Climate LTD», Китай	1	При необходимости
54.	Система кондиционирования Mitsubishi Electric в составе наружный блок MXZ + Внутренний блок MSZ	Производство: Mitsubishi Electric Corporation, Япония	Не более 2	При необходимости
55.	Электрогенераторная установка с маркировкой «ELEMAR», модели: SH6500EX, SH11000	Производство: «SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD», Япония	1	При необходимости
Встраиваемая мебель				
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Диспансеризация» на базе транспортного средства АМС-49415Н или VFM6АО или ПМК-48415Н				
1.	Столешница для крепления к стенам БСП161060970	МДКР.0010.000	1	При необходимости
2.	Столешница для крепления к стенам БСП16600600	МДКР.0010.000	1	При необходимости
3.	Столешница для крепления к стенам БСП16850600	МДКР.0010.000	не более 3	При необходимости
4.	Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161520600М	МДКР.0010.000	1	При необходимости
5.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости
6.	Шкаф настенный НШР800500300	МДКР.0010.000	не более 4	При необходимости
7.	Кушетка-рундук КР1800600550	МДКР.0010.000	не более 3	При необходимости
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Профосмотр» на базе транспортного средства 972200				
1.	Столешница для крепления к стенам БСП161000900	МДКР.0010.000	1	При необходимости
2.	Столешница для крепления к стенам БСП161500700	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости
3.	Столешница для крепления к стенам БСП16300300	МДКР.0010.000	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
4.	Столешница для крепления к стенам БСП16800400	МДКР.0010.000	1	При необходимости
5.	Столешница для крепления к стенам БСП16900500	МДКР.0010.000	не более 4	При необходимости
6.	Столешница для крепления к стенам БСП16450450	МДКР.0010.000	1	При необходимости
7.	Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161540400М	МДКР.0010.000	1	При необходимости
8.	Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161300500М	МДКР.0010.000	1	При необходимости
9.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости
10.	Шкаф настенный НШР800500300	МДКР.0010.000	не более 8	При необходимости
11.	Кушетка-рундук КР1800600550	МДКР.0010.000	2	При необходимости
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Лучевая диагностика» на базе транспортного средства АЛ-59860С-2				
1.	Столешница для крепления к стенам БСП161500400	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости
2.	Шкаф настенный НШР800500300	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости
3.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	1	При необходимости
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Стоматология» на базе транспортного средства АФ-47434А				
1.	Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161300500М	МДКР.0010.000	2	При необходимости
2.	Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161140500М	МДКР.0010.000	1	При необходимости
3.	Столешница для крепления к стенам БСП16850600	МДКР.0010.000	1	При необходимости
4.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	1	При необходимости
5.	Шкаф настенный НШР800500300	МДКР.0010.000	4	При необходимости
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Офтальмология» на базе транспортного средства АФ-371703				
1.	Столешница для крепления к стенам БСП16900500	МДКР.0010.000	2	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
2.	Столешница для крепления к стенам БСП161350400	МДКР.0010.000	1	При необходи мости
3.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	1	При необходи мости
4.	Шкаф настенный НШР675400300	МДКР.0010.000	4	При необходи мости
5.	Шкаф напольный для одежды ШОР1900800500	МДКР.0010.000	1	При необходи мости
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 878913, 185514 или 692732				
1.	Столешница для крепления к стенам БСП16900500	МДКР.0010.000	не более 4	При необходи мости
2.	Столешница для крепления к стенам БСП16800400	МДКР.0010.000	не более 3	При необходи мости
3.	Столешница для крепления к стенам БСП16300300	МДКР.0010.000	1	При необходи мости
4.	Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161140500М	МДКР.0010.000	не более 2	При необходи мости
5.	Кушетка-рундук КР1800600550	МДКР.0010.000	не более 2	При необходи мости
6.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	не более 3	При необходи мости
7.	Шкаф настенный НШР800500300	МДКР.0010.000	не более 3	При необходи мости
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Флюорография» на базе транспортного средства 385527 или ПМК-48415К				
1.	Столешница для крепления к стенам БСП16600600	МДКР.0010.000	не более 2	При необходи мости
2.	Столешница для крепления к стенам БСП16900500	МДКР.0010.000	1	При необходи мости
3.	Столешница для крепления к стенам БСП161500400	МДКР.0010.000	1	При необходи мости
4.	Шкаф настенный НШР800500300	МДКР.0010.000	не более 2	При необходи мости
5.	Кушетка-рундук КР1800600550	МДКР.0010.000	1	При необходи мости
6.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	1	При необходи мости
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Маммография» на базе транспортного средства ПМК-48415К				

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
1.	Столешница для крепления к стенам БСП16600600	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости
2.	Столешница для крепления к стенам БСП16900500	МДКР.0010.000	1	При необходимости
3.	Столешница для крепления к стенам БСП161500400	МДКР.0010.000	1	При необходимости
4.	Шкаф настенный НШР800500300	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости
5.	Кушетка-рундук КР1800600550	МДКР.0010.000	1	При необходимости
6.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	1	При необходимости
Эксплуатационная документация				
1.	Руководство по эксплуатации	МДКР.0010.000 РЭ	1	
2.	Паспорт	МДКР.0010.000 ПС	1	
3.	Эксплуатационные документы на покупные части	РЭ	-	

4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Комплекс может транспортироваться в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида своим ходом или авиационным, водным и железнодорожным транспортом без разборки, а также с разборкой на шасси и кузов-фургон в соответствии с договором на поставку.

При транспортировании железнодорожным транспортом, размещение и крепление на открытой платформе или в вагоне должно выполняться в соответствии с требованиями ЦМ-943 «Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» МПС России, а также эксплуатационной документации на Комплекс и базовое транспортное средство.

При погрузочных и разгрузочных работах должны быть приняты меры для защиты Комплекса от механических повреждений.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Комплекс должен храниться в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 не более 1 года. При хранении необходимо учитывать требования к хранению базового транспортного средства и требованиям по хранению других комплектующих изделий.

Если после указанного срока Комплекс не вводится в эксплуатацию, то необходимо произвести его консервацию в соответствии с ГОСТ 9.014 с целью обеспечения его сохранности и работоспособности.

При хранении в закрытых помещениях более 1 месяца производится очистка Комплекса; увеличивается давление воздуха в шинах на 0,5 бара от номинального значения; отпускается стояночный тормоз и устанавливаются противооткатные башмаки; отсоединяется аккумуляторная батарея и связываются кабельные наконечники и зажимы.

При хранении под открытым небом более 1 месяца проводятся те же самые работы, что и при хранении в закрытых помещениях, а также отводятся стеклоочистители от ветрового стекла; закрываются все отверстия для впуска воздуха и устанавливается система отопления на «Выкл.»; демонтируется аккумуляторная батарея и хранится в соответствии с информацией изготовителя.

На площадках хранения Комплекс должен быть размещен с устройством проездов и проходов, обеспечивающих безопасное проведение погрузо-разгрузочных работ, уборку территории.

5. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В период эксплуатации Комплекса должны выполняться инструкции по эксплуатации, порядок и правила исполнения работ по техническому обслуживанию, установленные в эксплуатационных документах.

Передвижение Комплекса осуществляется по дорогам с твердым асфальтовым покрытием не более 60 км/ч, а по грунтовым не более 20 км/ч.

Эксплуатация Комплекса допускается при температуре на улице: от минус 40°C до +40°C; внутри Комплекса: не менее +15°C и не более +35°C.

Потребитель должен укомплектовать комплекс знаком ограничения скорости и производить замену по истечению срока годности огнетушителей, содержимого медицинской аптечки и других расходных материалов.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель гарантирует соответствие Комплекса настоящим требованиям при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации Комплекса – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при общем пробеге за этот период не более 60000 км.

Гарантийный срок эксплуатации и наработка на базовое транспортное средство, двигатель, шины, аккумуляторные батареи и лампы даются предприятиями-изготовителями в соответствии с утвержденными на них стандартами.

Средний срок службы Комплексов должен быть не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления

Комплекса путем ремонта. Оценка состояния Комплекса проводится комиссией на основании дефектной ведомости и акта.

Использование Комплекса не по назначению, а также эксплуатация его с нарушением указаний руководства по эксплуатации и внесение каких-либо конструкторских изменений без согласования с разработчиком конструкторской документации, не разрешаются.

В случае невыполнения указанных условий предприятие-изготовитель рекламаций от потребителя не принимает и претензии не рассматривает.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация транспортного средства, полуприцепа согласно требованиям заводов изготовителей, указанных в инструкциях на изделия.

Утилизация медицинских изделий и специального оборудования осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Утилизация медицинского оборудования, содержащего источники ионизирующего излучения, согласно СанПиН 2.6.1.2891.

Утилизации медицинских отходов в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование комплекса: _____

Серийный № _____

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

ОТК _____

М.П.

Приложение А (обязательное)

ЗАО «НПО «МЕДКАР»: 140104, Московская область, г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 62, ком. 206

Адрес производства: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Кооперативная, д. 10

Телефон: +7(495) 540-45-96, e-mail: med@medcar.ru

Гарантийный талон

На ремонт в течение гарантийного срока

Изделия медицинского назначения

Наименование комплекса: _____

Серийный номер и дата выпуска _____
(Заполняется производителем)

Подпись ответственного _____

М.П.

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(дата, подпись, № акта ввода в эксплуатацию)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

(подпись и печать руководителя ремонтного предприятия)

(подпись и печать руководителя учреждения владельца)

Приложение В
 Схема планировки Комплекса «Диспансеризация» на базе транспортного средства
 АМС-49415Н, VFM6АО, Рисунок В.1.

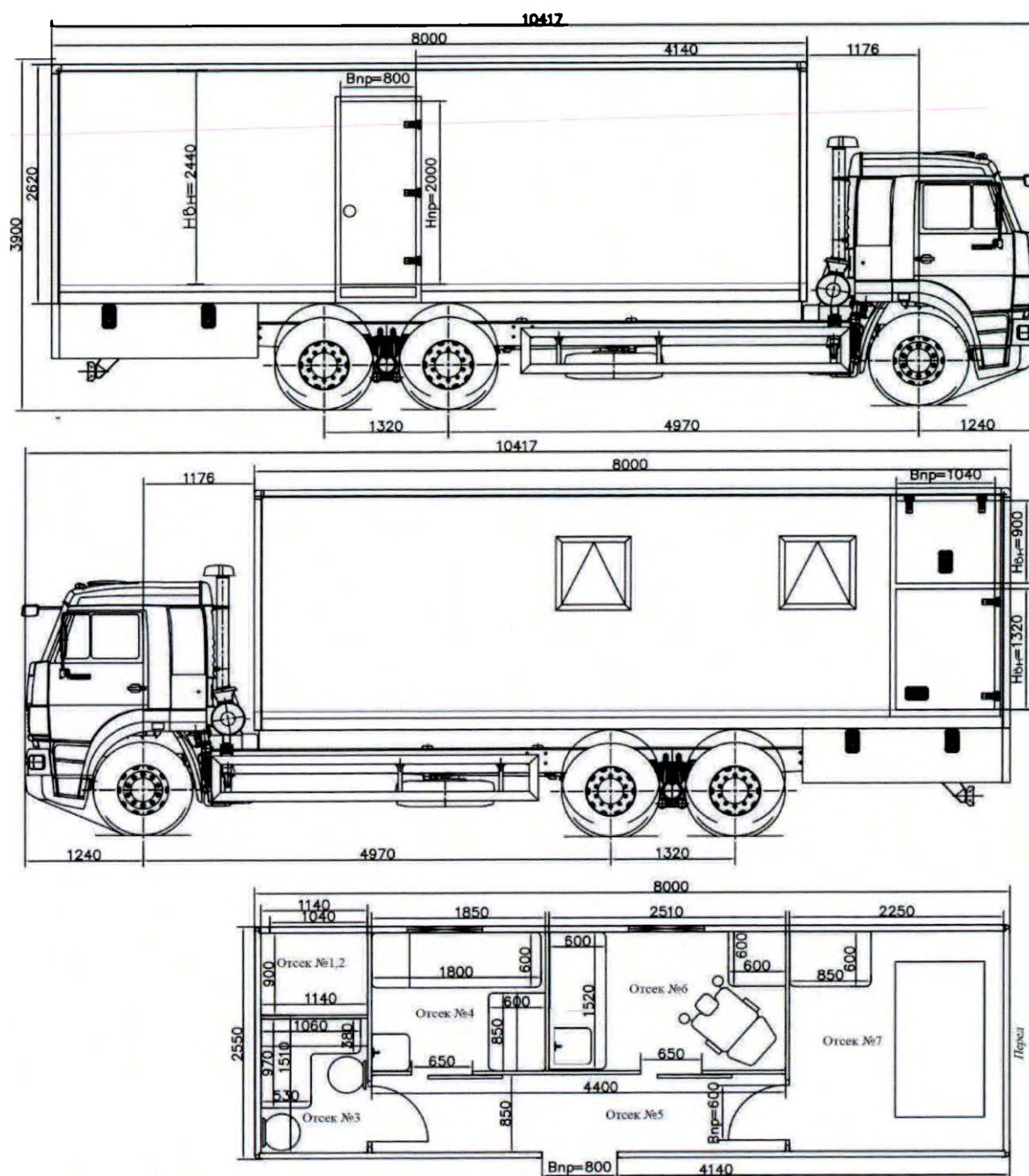


Рисунок В.1.

1. Генераторный отсек, (высота помещения = 1320 мм)
2. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)
3. Кабинет 1 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
4. Кабинет 2 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
5. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)
6. Кабинет 3 (Женское здоровье), (высота помещения = 2440 мм)
7. Кабинет 4 (Рентгенодиагностика), (высота помещения = 2440 мм)

Схема планировки Комплекса «Диспансеризация» на базе транспортного средства ПМК-48415Н (Рисунок В.2)

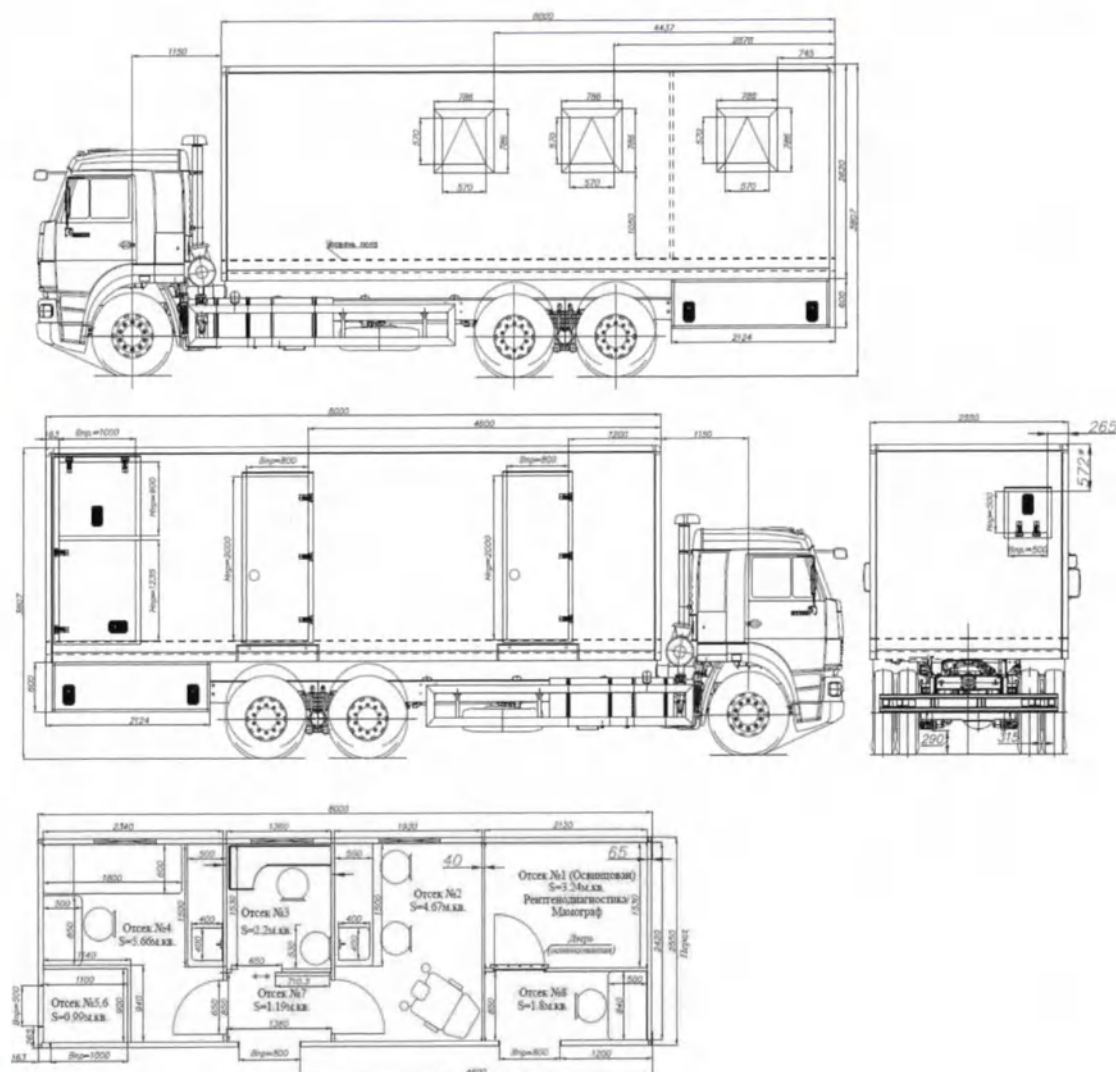


Рисунок В.2.

1. Генераторный отсек, (высота помещения = 1320 мм)
2. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)
3. Кабинет 1 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
4. Кабинет 2 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
5. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)
6. Кабинет 3 (Женское здоровье), (высота помещения = 2440 мм)
7. Кабинет 4 (Рентгенодиагностика/Маммография), (высота помещения = 2440 мм)

**Схема планировки Комплекса «Профосмотр» на базе транспортного средства 972200,
Рисунок В.3., Рисунок В.4, Рисунок В.5**



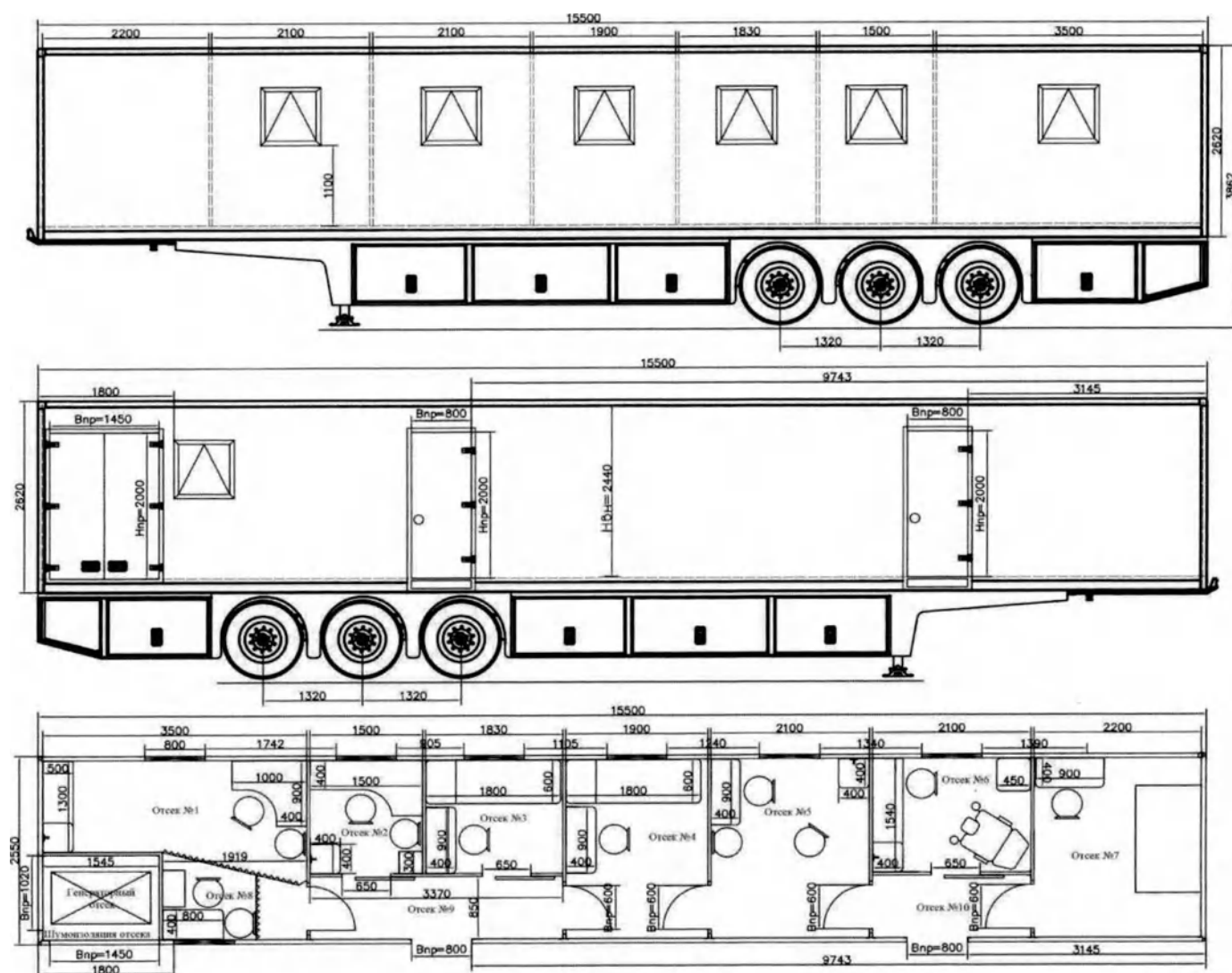


Рисунок В.3. Планировка 1

1. Кабинет 1 (Офтальмология), (высота помещения = 2440 мм)
 2. Кабинет 2 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
 3. Кабинет 3 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
 4. Кабинет 4 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
 5. Кабинет 5 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
 6. Кабинет 6 (Женское здоровье), (высота помещения = 2440 мм)
 7. Кабинет 7 (Рентгенодиагностика), (высота помещения = 2440 мм)
 8. Кабинет 8 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
 9. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)
 10. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)
- Генераторный отсек (высота помещения = 2440 мм)

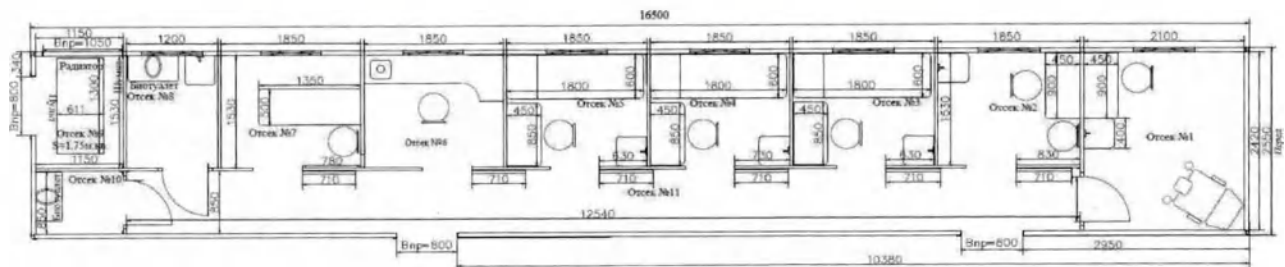

1. Кабинет 1 (Женское здоровье), (высота помещения = 2440 мм)
2. Кабинет 2 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
3. Кабинет 3 (Офтальмология), (высота помещения = 2440 мм)
4. Кабинет 4 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
5. Кабинет 5 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
6. Кабинет 6 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
7. Кабинет 7 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
8. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
9. Генераторный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
10. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
11. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)

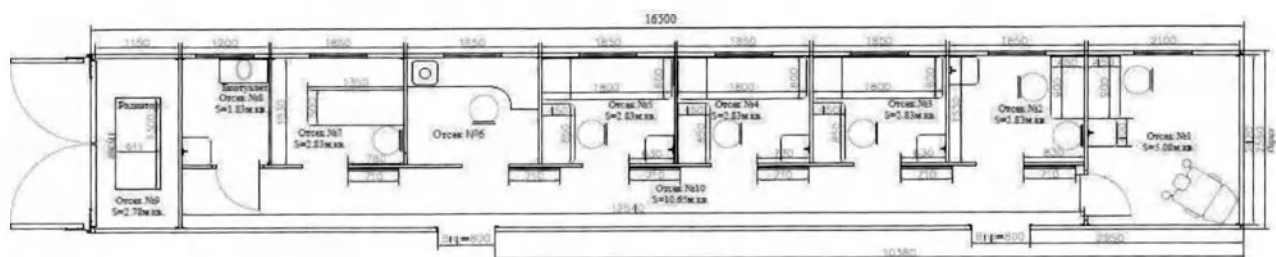

1. Кабинет 1 (Женское здоровье), (высота помещения = 2440 мм)
2. Кабинет 2 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
3. Кабинет 3 (Офтальмология), (высота помещения = 2440 мм)
4. Кабинет 4 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
5. Кабинет 5 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
6. Кабинет 6 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
7. Кабинет 7 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
8. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
9. Генераторный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
10. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)

Схема планировки Комплекса «Лучевая диагностика» на базе транспортного средства АЛ-59860С-2, Рисунок В.6.

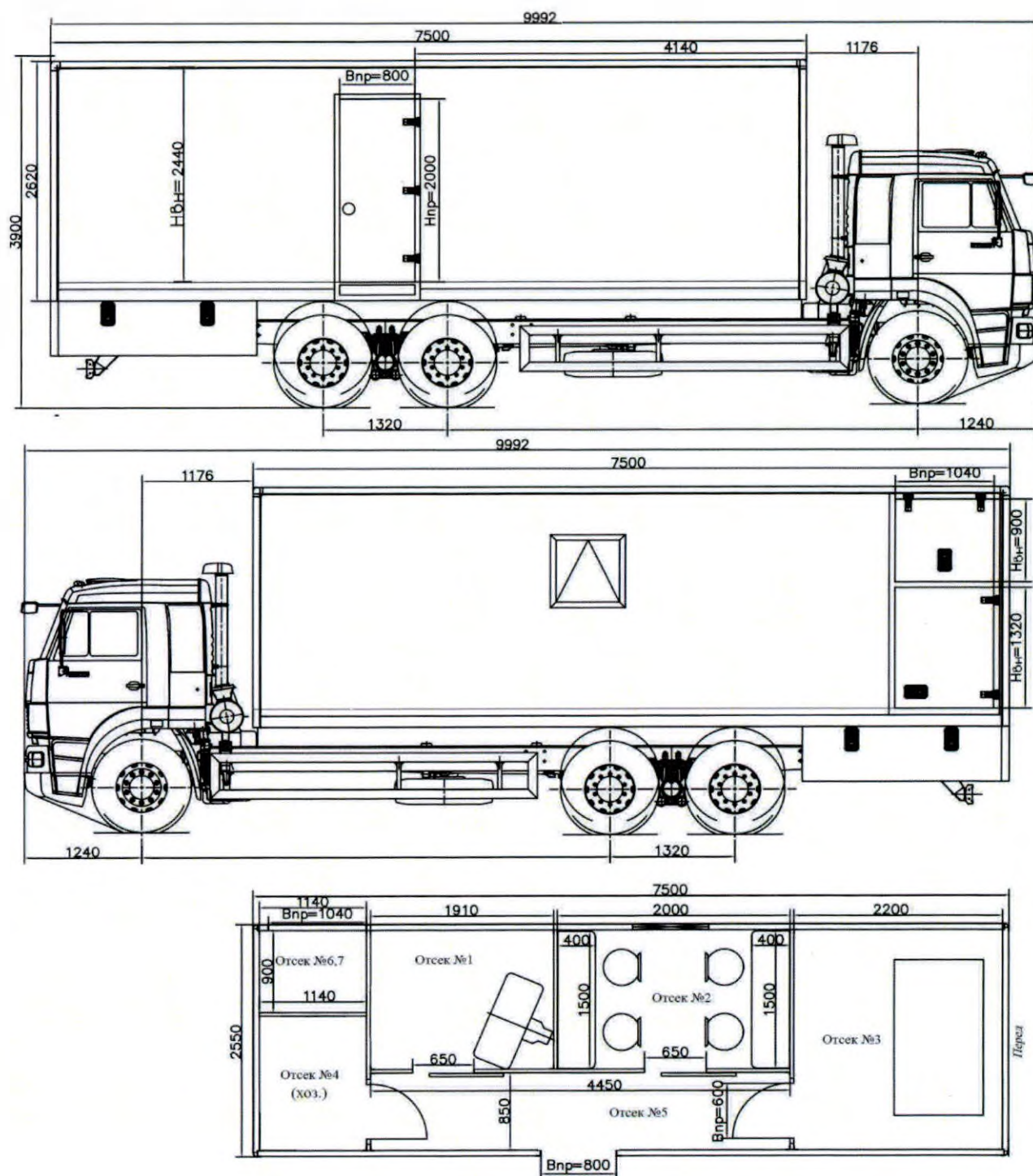


Рисунок В.6.

1. Кабинет 1 (Маммография), (высота помещения = 2440 мм)
2. Кабинет 2 (Рабочие места маммолога и рентгенолога), (высота помещения = 2440 мм)
3. Кабинет 3 (Рентгенодиагностика), (высота помещения = 2440 мм)
4. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
5. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)
6. Генераторный отсек, (высота помещения = 1320 мм)
7. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)

Схема планировки Комплекса «Стоматология» на базе транспортного средства АФ-47434А,
Рисунок В.7.

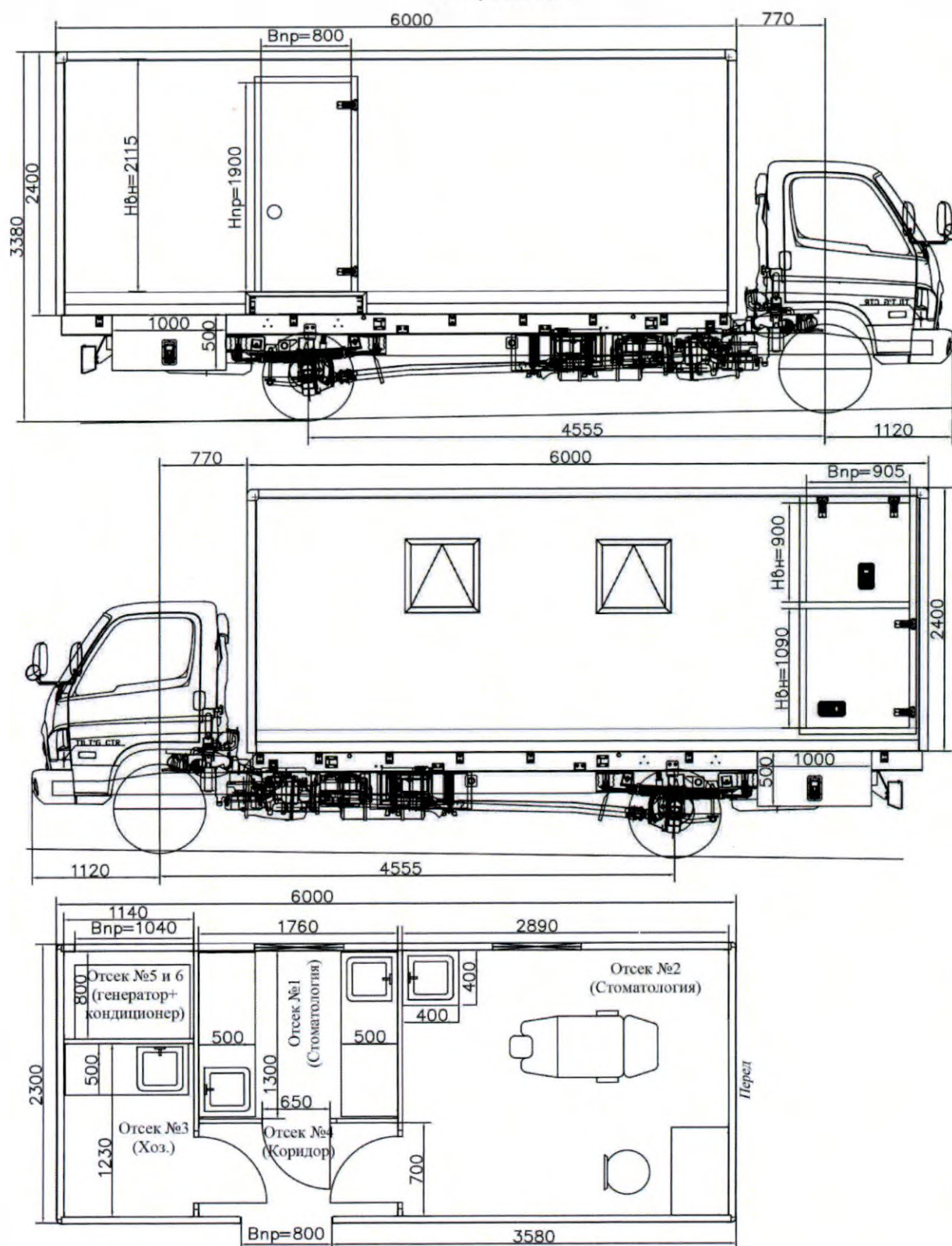


Рисунок В.7.

1. Кабинет 1 (Стоматология), (высота помещения = 2115 мм)
2. Кабинет 2 (Стоматология), (высота помещения = 2115 мм)
3. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2115 мм)
4. Коридор, (высота помещения = 2115 мм)
5. Генераторный отсек, (высота помещения = 1090 мм)
6. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)

Схема планировки Комплекса «Офтальмология» на базе транспортного средства АФ-371703,
Рисунок В.8.

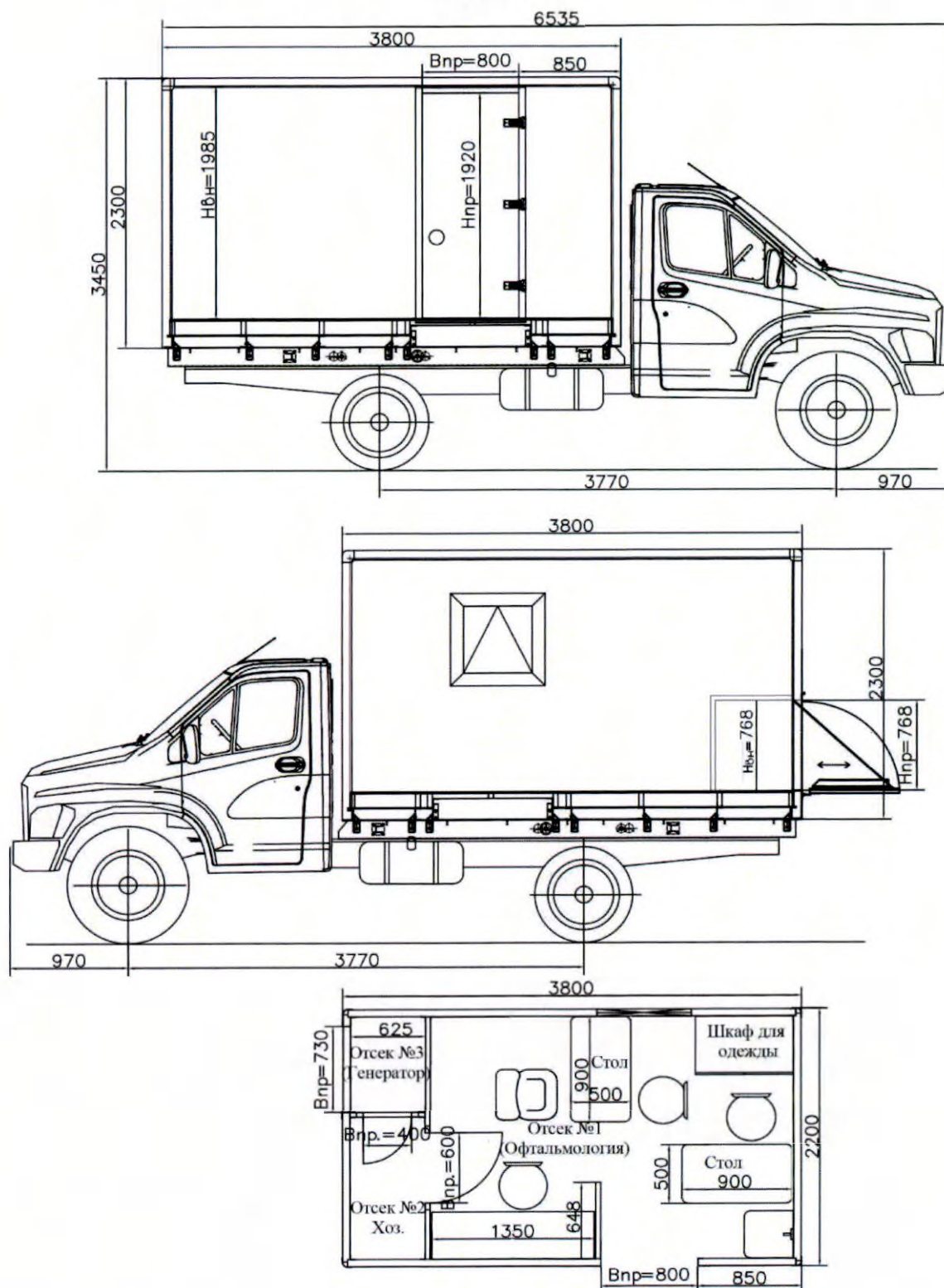


Рисунок В.8.

1. Кабинет 1 (Офтальмология), (высота помещения = 1985 мм)
2. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 1985 мм)
3. Генераторный отсек, (высота помещения = 768 мм)

Схема планировки Комплекса «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 878913 Рисунок В.9, 185514 Рисунок В.10 или 692732 Рисунок В.11.

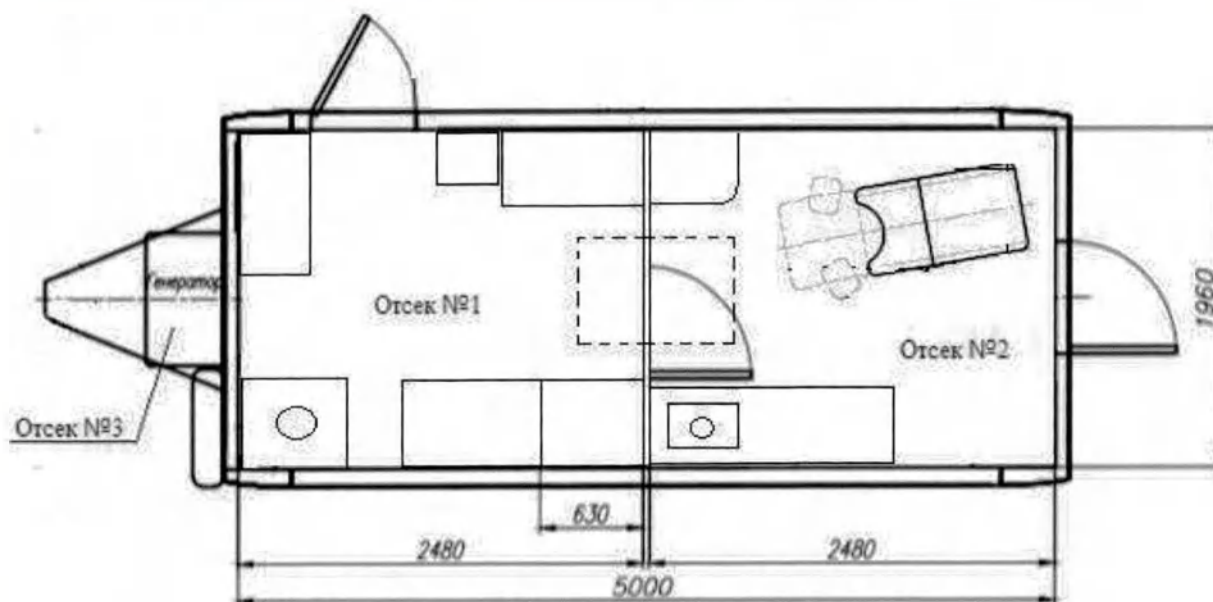


Рисунок В.9

1. Кабинет (Диагностика), (высота помещения = 1950)
2. Кабинет (Женское здоровье), (высота помещения = 1950)
3. Генераторный отсек, (высота помещения = 800)

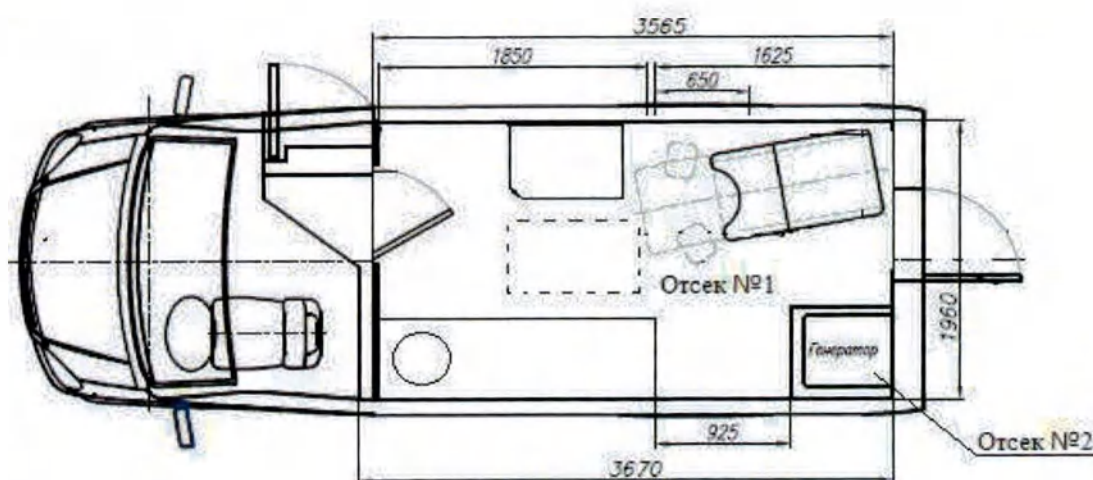


Рисунок В.10

1. Кабинет (Диагностика), (высота помещения = 1950)
2. Генераторный отсек, (высота помещения = 800)

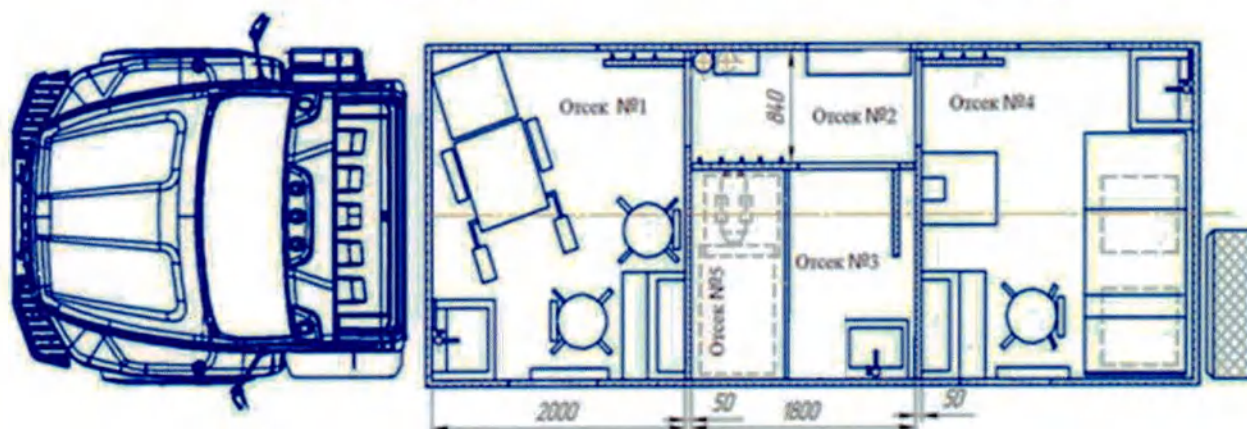
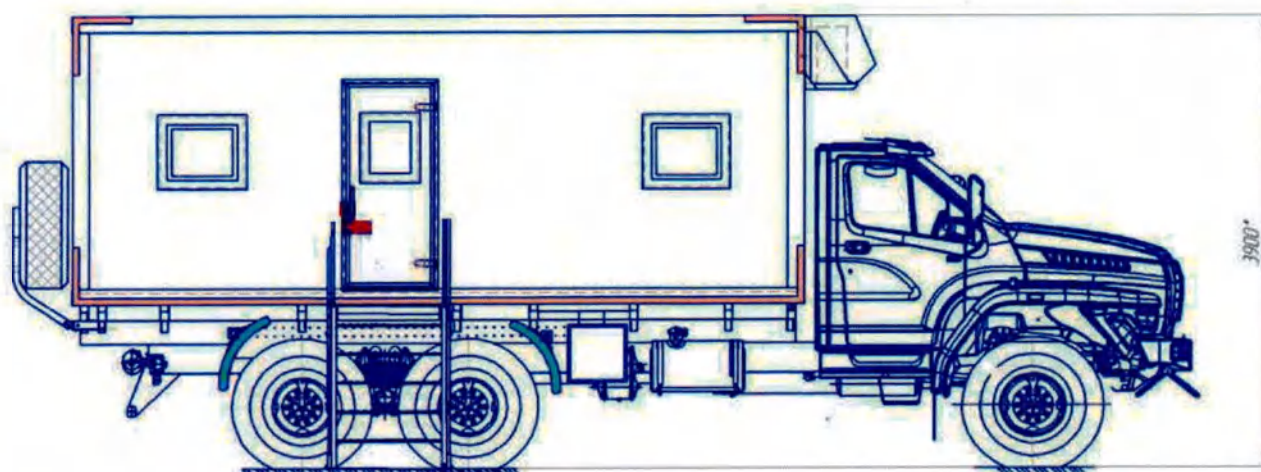
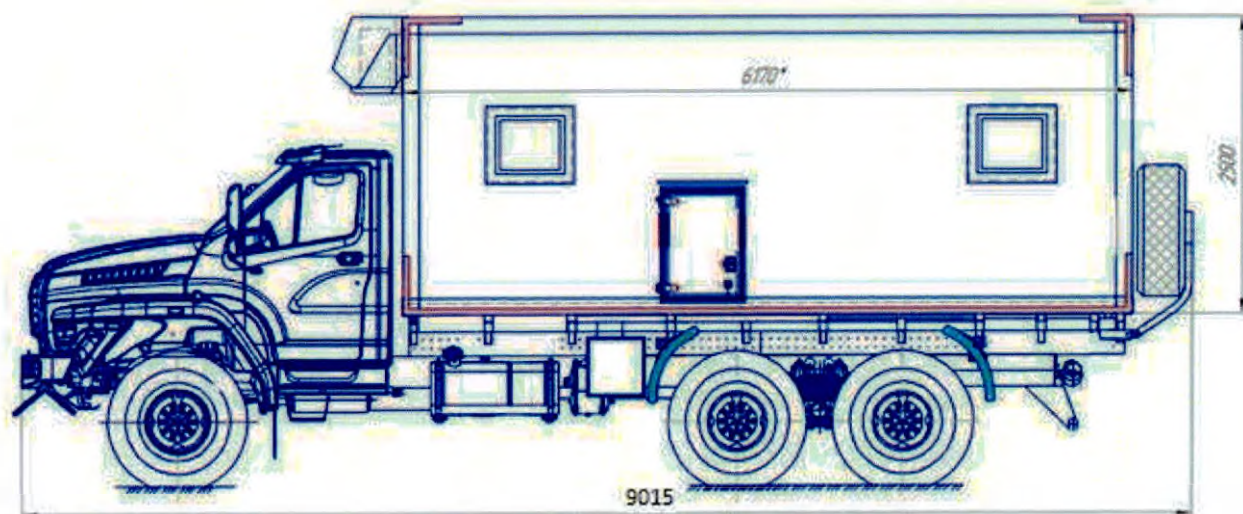


Рисунок В.11

1. Кабинет (Женское здоровье), (высота помещения = 2340)
2. Коридор, (высота помещения = 2340)
3. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2340)
4. Кабинет (Диагностика), (высота помещения = 2340)
5. Генераторный отсек, (высота помещения = 1000)

Схема планировки Комплекса «Флюорография» на базе транспортного средства
385527 Рисунок В.12.

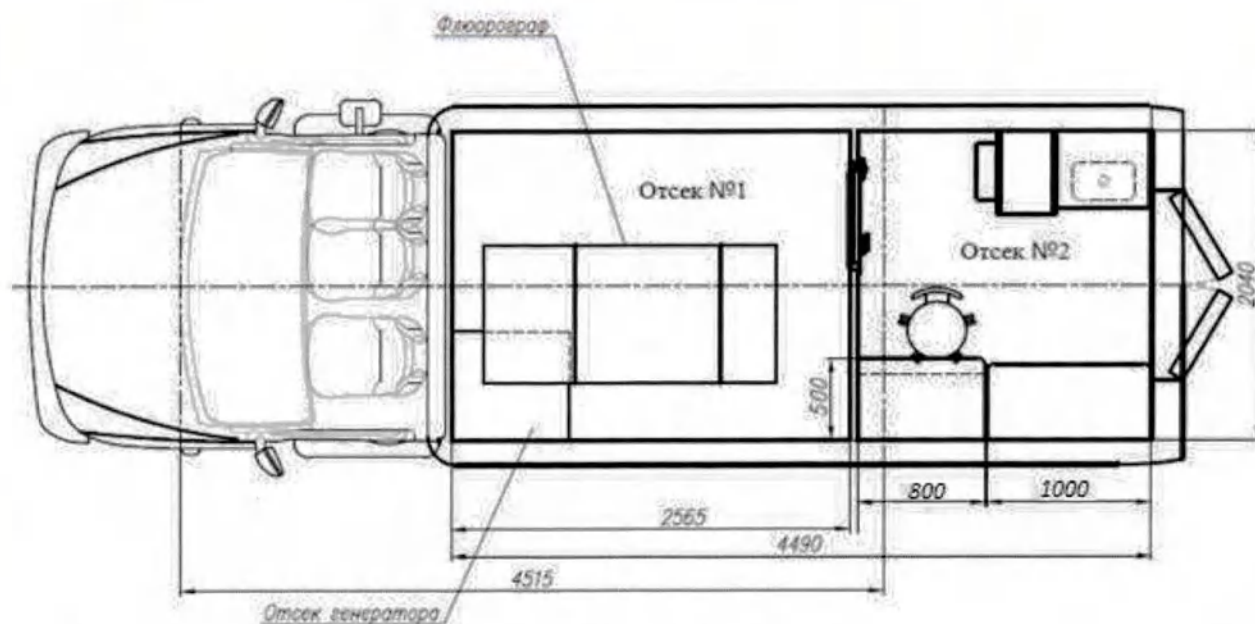


Рисунок В.12.

1. Кабинет 1 (Рентгенодиагностика), (высота помещения = 1900 мм)
2. Кабинет 2 (Рабочее место рентгенолога), (высота помещения = 1900мм)

Схема планировки Комплекса «Флюорография» на базе транспортного средства ПМК-48415К (Рисунок В.13).

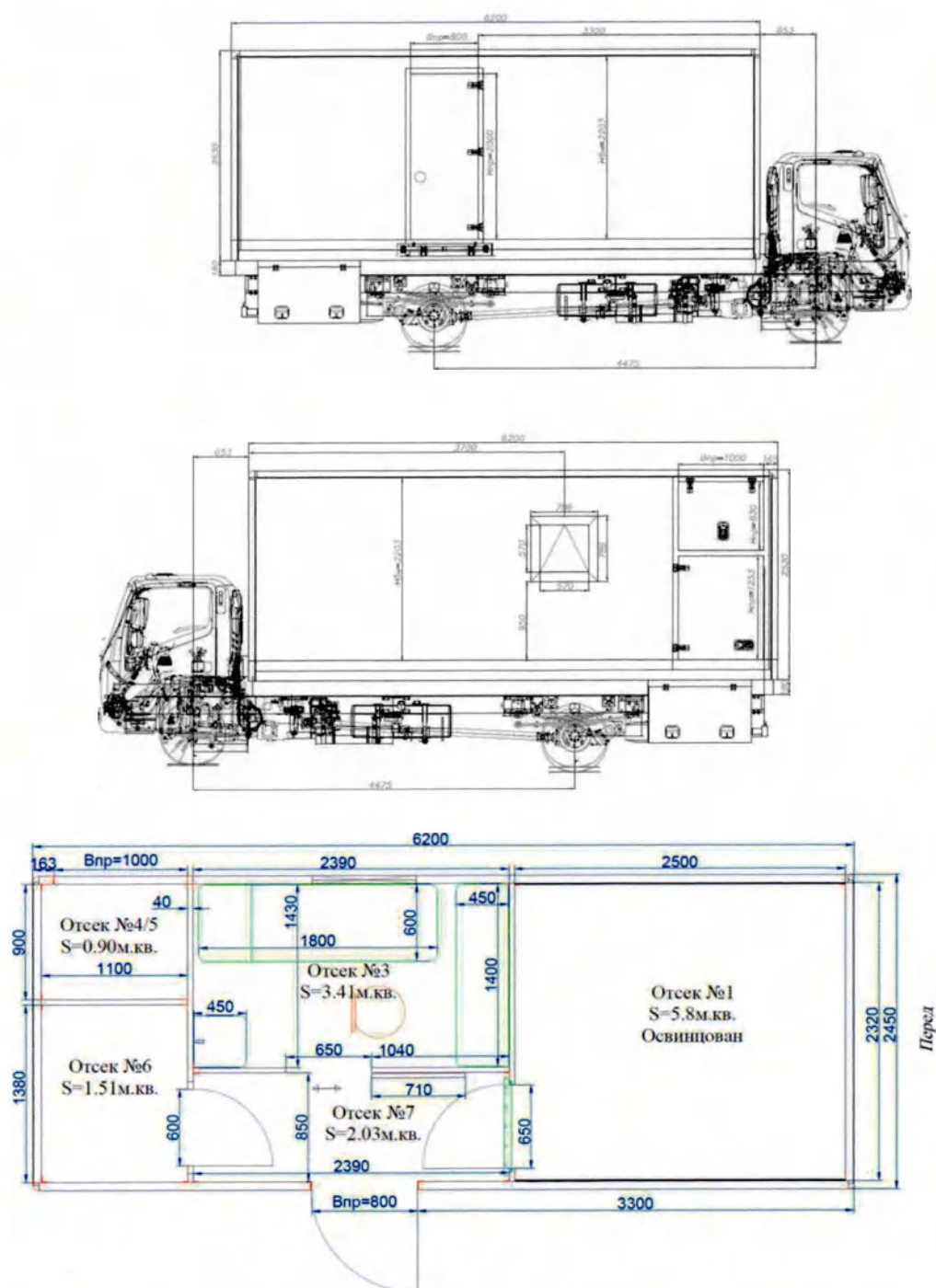


Рисунок В.13

1. Кабинет 1 (Рентгенодиагностика), (высота помещения = 2203 мм)
2. Кабинет 3 (Рабочее место рентгенолога), (высота помещения = 2203 мм)
3. Хозяйственный отсек Отсек - 6, (высота помещения = 2203)
4. Генераторный отсек, (высота помещения = 1253)
5. Отсек кондиционера, (высота помещения = 830 мм)
6. Коридор, Отсек 7 (высота помещения = 2203 мм)

Схема планировки Комплекса «Маммография» на базе транспортного средства ПМК-48415К
(Рисунок В.14).

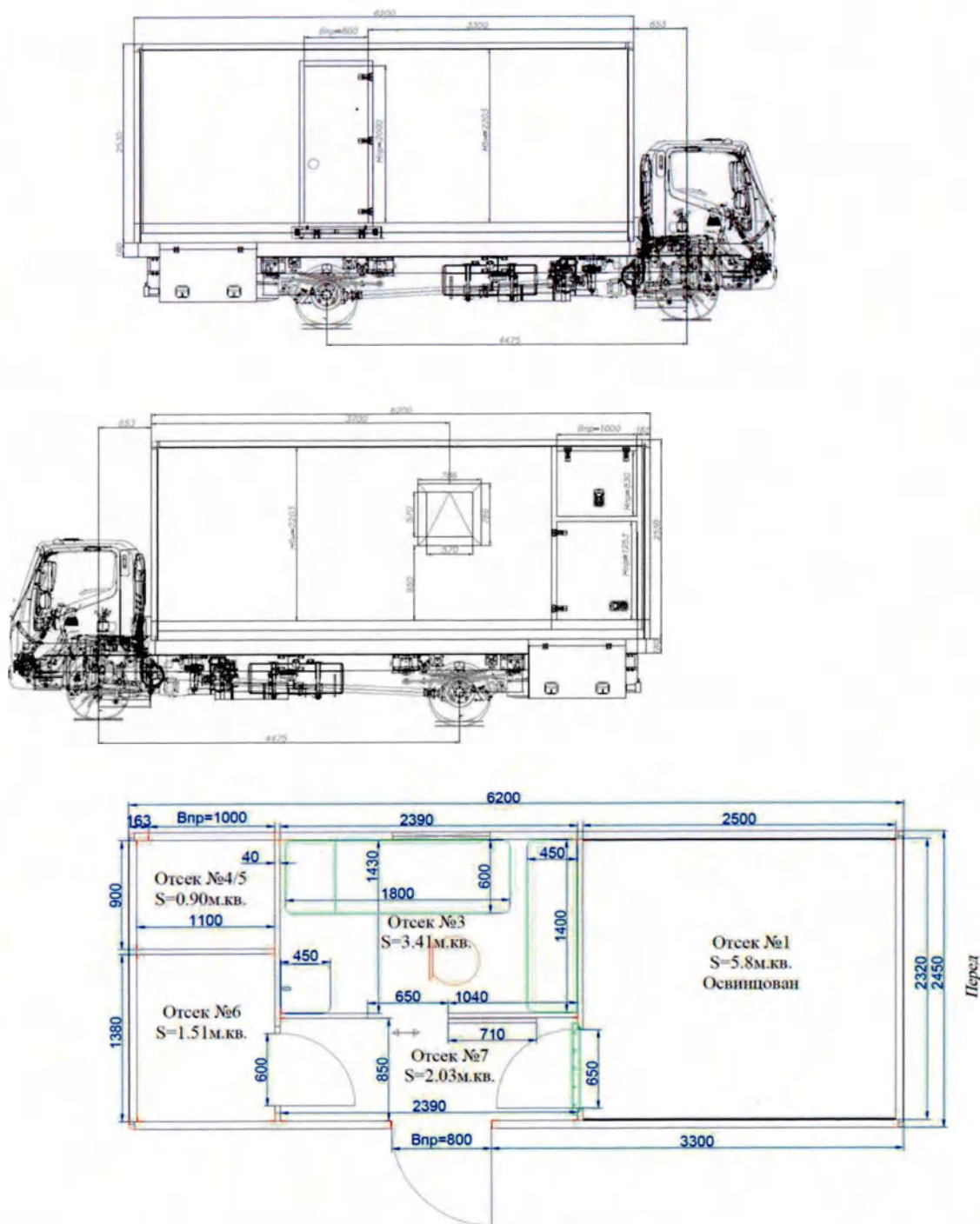


Рисунок Б.14

1. Кабинет 1 (Маммография), (высота помещения = 2203 мм)
2. Кабинет 3 (Рабочее место рентгенолога), (высота помещения = 2203 мм)
3. Хозяйственный отсек Отсек - 6, (высота помещения = 2203)
4. Генераторный отсек, (высота помещения = 1253)
5. Отсек кондиционера, (высота помещения = 830 мм)
6. Коридор, Отсек 7 (высота помещения = 2203 мм)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Диспансеризация» на базе транспортного средства АМС-49415Н, VFM6AO Рисунок Г.1.

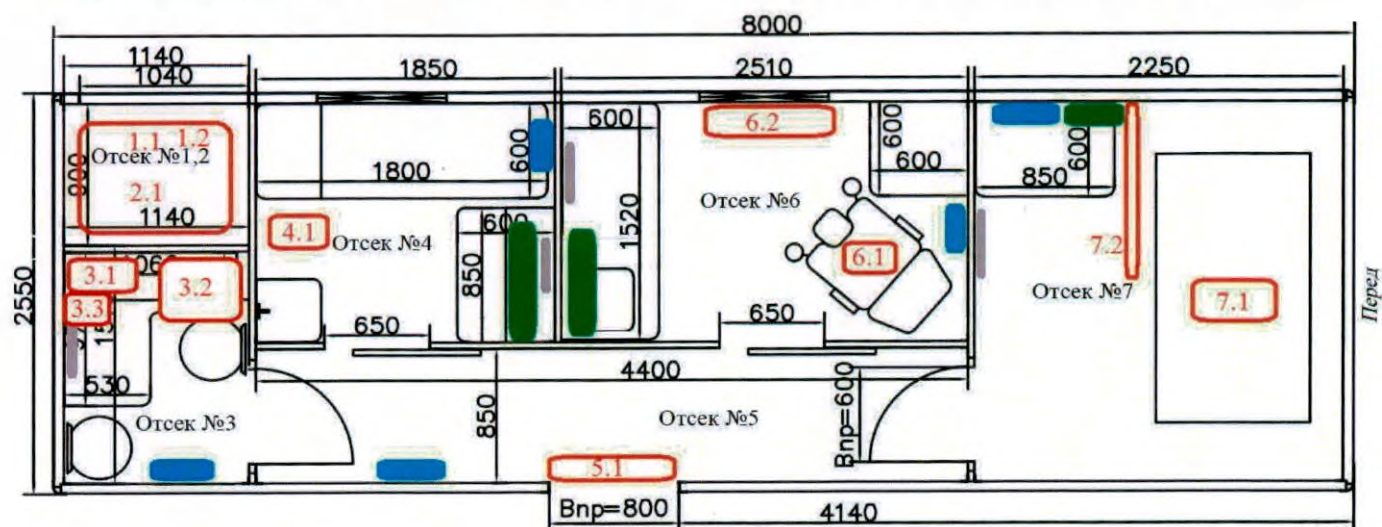


Рисунок Г.1.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

1.1 - электрогенераторная установка;

1.2 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;

2.1 - внешний блок кондиционера;

3.1 - воздушный отопитель;

3.2 - установка вентиляционная;

3.3 - вентилятор промышленный;

4.1 - весы напольные медицинские электронные и ростомер;

5.1 - промышленная воздушная завеса;

6.1 - кресло гинекологическое;

6.2 - кольпоскоп;

7.1 - флюорограф;

7.2 - ширма рентгенозащитная.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в
Комплексе «Диспансеризация» на базе транспортного средства ПМК-48415 Н
Рисунок Г.2.

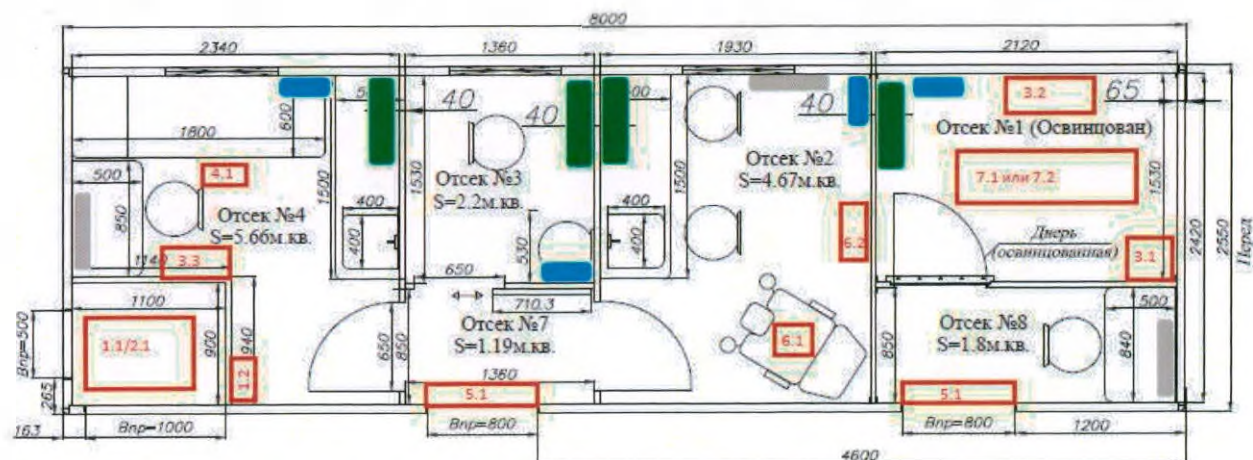


Рисунок Г.2.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

1.1 - электрогенераторная установка;

1.2 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;

2.1 - внешний блок кондиционера;

3.1 - воздушный отопитель;

3.2 - установка вентиляционная;

3.3 - вентилятор промышленный;

4.1 - весы напольные медицинские электронные и ростомер;

5.1 - промышленная воздушная завеса;

6.1 - кресло гинекологическое;

6.2 - кольпоскоп;

7.1 - флюорограф;

7.2 - маммограф.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в
Комплексе «Профосмотр» на базе транспортного средства 972200, Рисунок Г.3., Г.4.,
Г.5

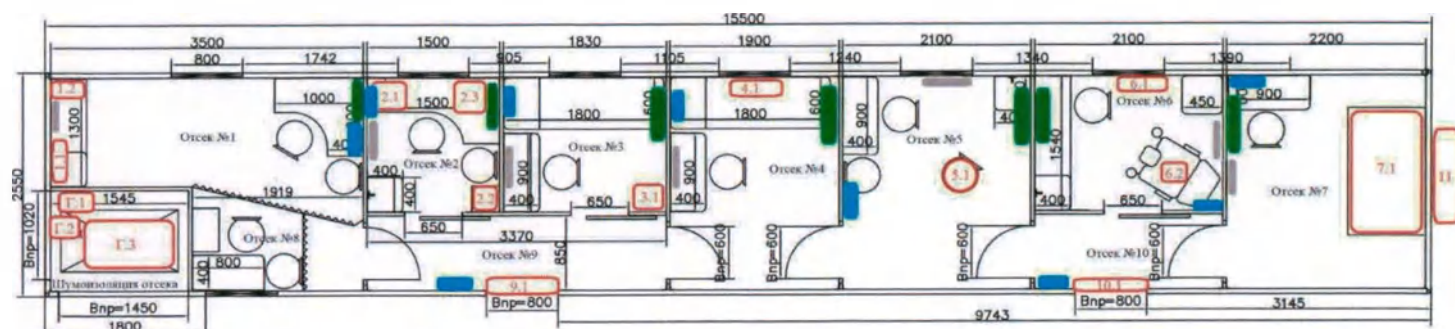


Рисунок Г.3. Планировка 1

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

Г.1 - multifunctional autonomous energy converter;

Г.2 - industrial fan;

Г.3 - electrogenerator installation;

1.1 - table lamp;

1.2 - reception-control security device;

2.1 - hematology analyzer;

2.2 - air sterilizer;

2.3 - refrigerator;

3.1 - ultrasonic diagnostic device;

4.1 - air heater;

5.1 - Barani chair;

6.1 - colposcope;

6.2 - gynecological chair;

7.1 - X-ray device;

9.1, 10.1 - industrial air curtain;

11 - external air conditioner block.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в
Комплексе «Профосмотр» на базе транспортного средства 972200, Рисунок Г.4.

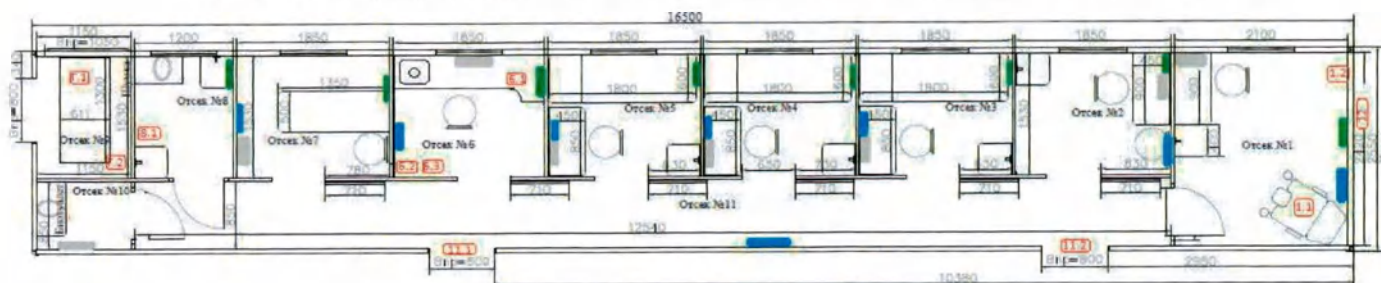


Рисунок Г.4. Планировка 2

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

Г.1 - электрогенераторная установка;

Г.2 - вентилятор промышленный;

1.1 - кресло гинекологическое;

1.2 - кольпоскоп;

6.1 - гематологический анализатор;

6.2 - холодильник;

6.3 - стерилизатор воздушный;

8.1 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;

11.1, 11.2 - промышленная воздушная завеса;

12 - внешний блок кондиционера.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе
«Профосмотр» на базе транспортного средства 972200, Рисунок Г.5.



Рисунок Г.5. Планировка 3

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

Г.1 - электрогенераторная установка;

Г.2 - установка вентиляционная;

Г.3 - внешний блок кондиционера;

1.1 - кресло гинекологическое;

1.2 - кольпоскоп;

6.1 - гематологический анализатор;

6.2 - холодильник;

6.3 - стерилизатор воздушный;

8.1 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;

10.1, 10.2 - промышленная воздушная завеса;

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Лучевая диагностика» на базе транспортного средства АЛ-59860С-2, Рисунок Г.6.

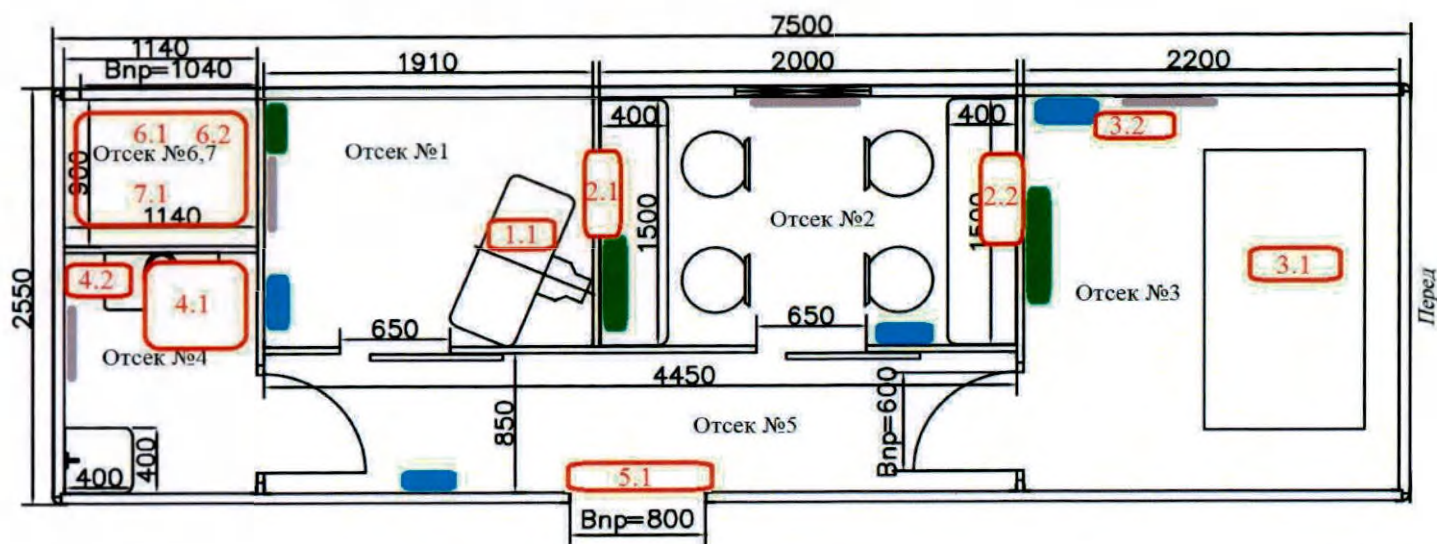


Рисунок Г.6.

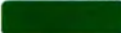
-  - обогреватели электрические конвекционные;
 -  - облучатели-рециркуляторы воздуха;
 -  - внутренние блоки кондиционеров;
- 1.1 - маммограф;
 - 2.1 - окно рентгенозащитное;
 - 2.2 - окно рентгенозащитное;
 - 3.1 - флюорограф;
 - 3.2 - воздушный отопитель;
 - 4.1 - установка вентиляционная;
 - 4.2 - вентилятор промышленный;
 - 5.1 - промышленная воздушная завеса;
 - 6.1 - электрогенераторная установка;
 - 6.2 - multifunctional автономный преобразователь энергии;
 - 7.1 - внешний блок кондиционера.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Стоматология» на базе транспортного средства АФ-47434А, Рисунок Г.7.

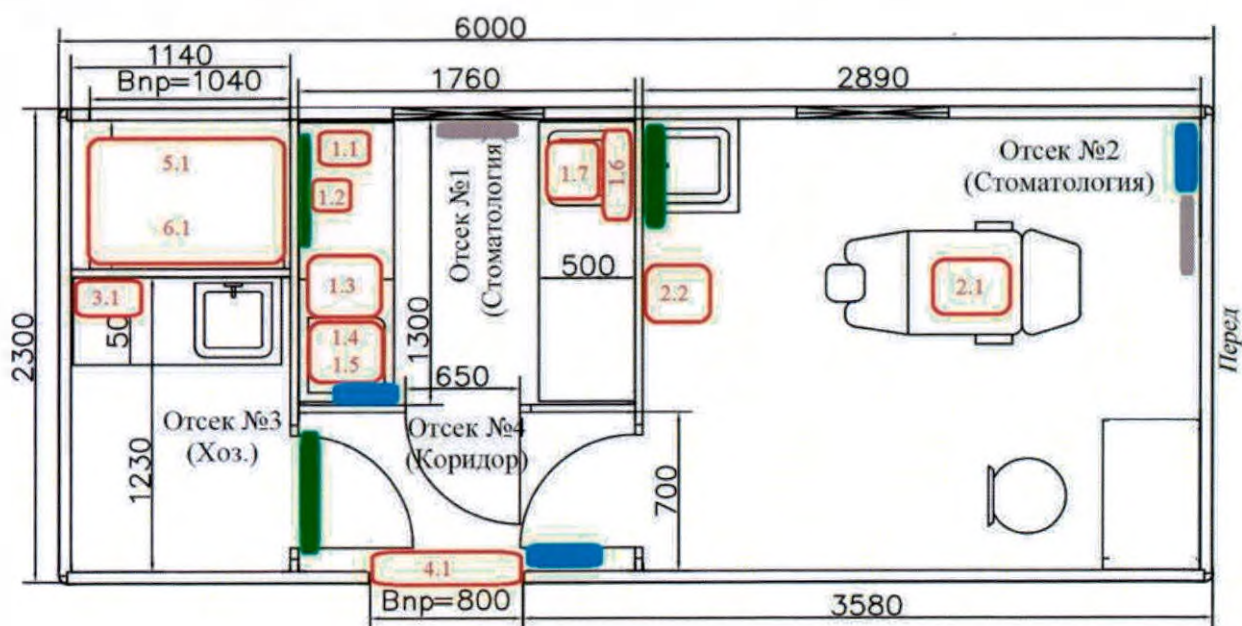


Рисунок Г.7.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

1.1 - камера бактерицидная для хранения инструментов;

1.2 - прибор приемно-контрольный охранный;

1.3 - холодильник;

1.4 - стерилизатор воздушный;

1.5 - многофункциональный автономный преобразователь энергии

1.6 - воздушный отопитель;

1.7 - компрессор стоматологический;

2.1 - установка стоматологическая;

2.2 - аппарат рентгеновский дентальный;

3.1 - вентилятор промышленный;

4.1 - промышленная воздушная завеса;

5.1 - электрогенераторная установка;

6.1 - внешний блок кондиционера.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе
«Офтальмология» на базе транспортного средства АФ-371703, Рисунок Г.8.

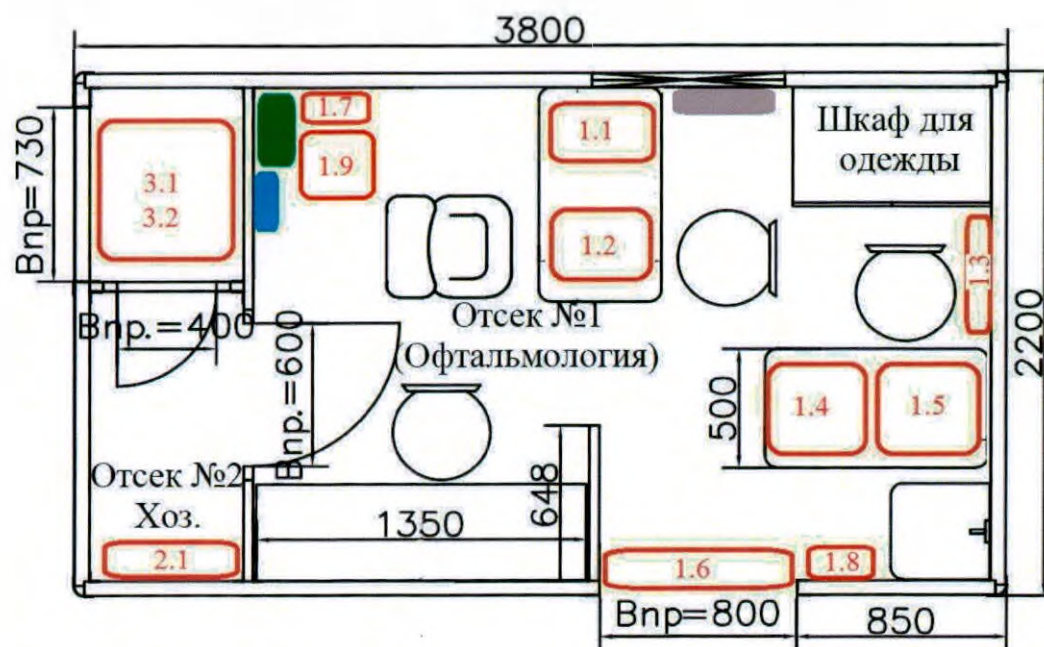


Рисунок Г.8.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

1.1 - лампа щелевая офтальмологическая;

1.2 - авторефрактометр;

1.3 - проектор знаков экраный;

1.4 - бесконтактный тонометр;

1.5 - периметр автоматический;

1.6 - промышленная воздушная завеса;

1.7 - прибор приемно-контрольный охранный;

1.8 - вентилятор промышленный;

1.9 - сплит-система;

2.1 - воздушный отопитель;

3.1 - электрогенераторная установка;

3.2 - multifunctional автономный преобразователь энергии.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 878913, (Рисунок Г.9)

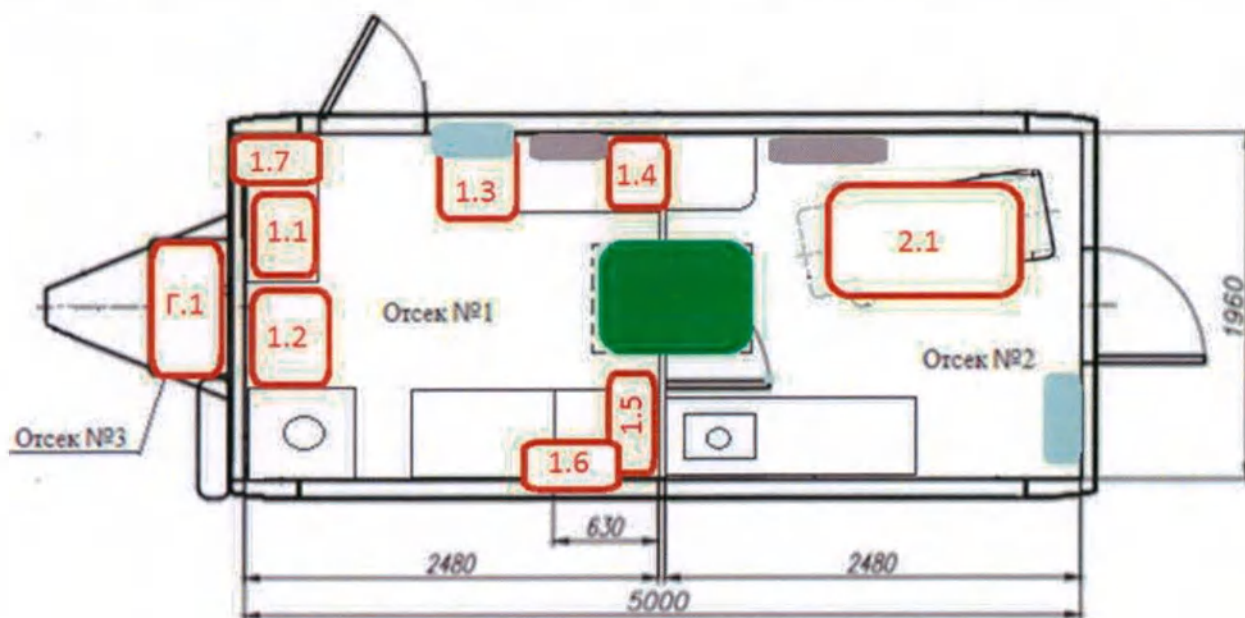


Рисунок Г.9.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

Г.1 - электрогенераторная установка;

1.1 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;

1.2 - аппарат ультразвуковой диагностический;

1.3 - холодильник;

1.4 - настенный тонометр;

1.5 - негатоскоп;

1.6 - воздушный отопитель;

1.7 - прибор приемно-контрольный охранный;

2.1 - гинекологическое кресло.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 185514 (Рисунок Г.10)

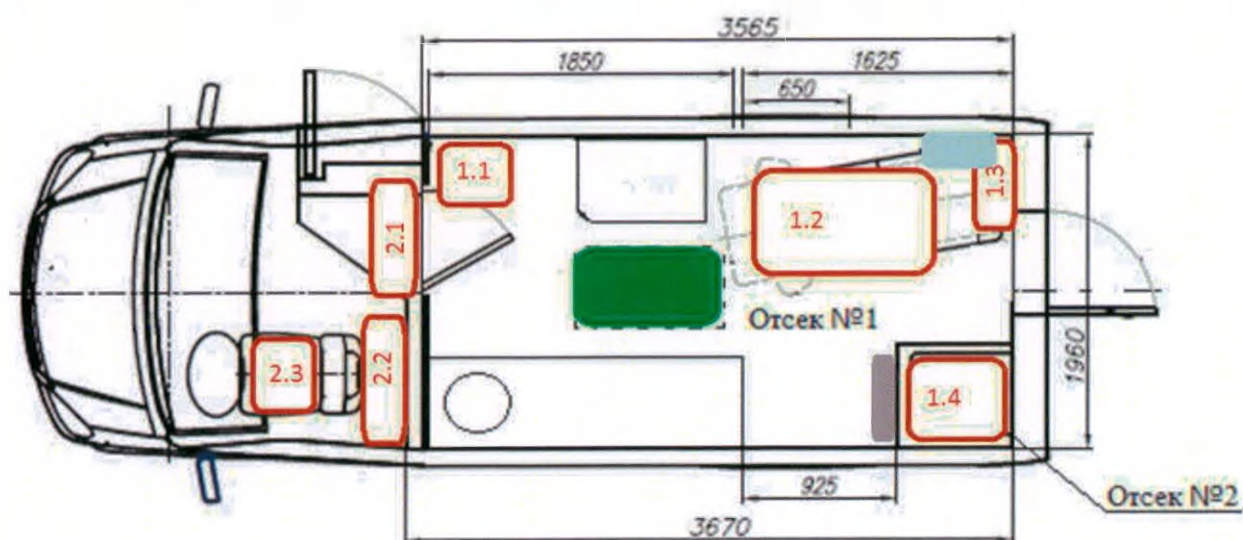


Рисунок Г.10.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

1.1 - весы напольные;

1.2 - гинекологическое кресло/донорское кресло;

1.3 - прибор приемно-контрольный охранный;

1.4 - электрогенераторная установка;

2.1 - промышленная воздушная завеса;

2.2 - воздушный отопитель;

2.3 - многофункциональный автономный преобразователь энергии.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 692732 (Рисунок Г.11)



Рисунок Г.11.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

Г.1 - воздушный отопитель;

Г.2 - электрогенераторная установка;

1.1 - гинекологическое кресло;

2.1 - промышленная воздушная завеса;

3.1 - прибор приемно-контрольный охранный;

3.2 - вентилятор промышленный;

3.3 - холодильник;

3.4 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;

4.1 - ростомер;

5 - внешний блок кондиционера.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Флюорография» на базе транспортного средства 385527 (Рисунок Г.12)

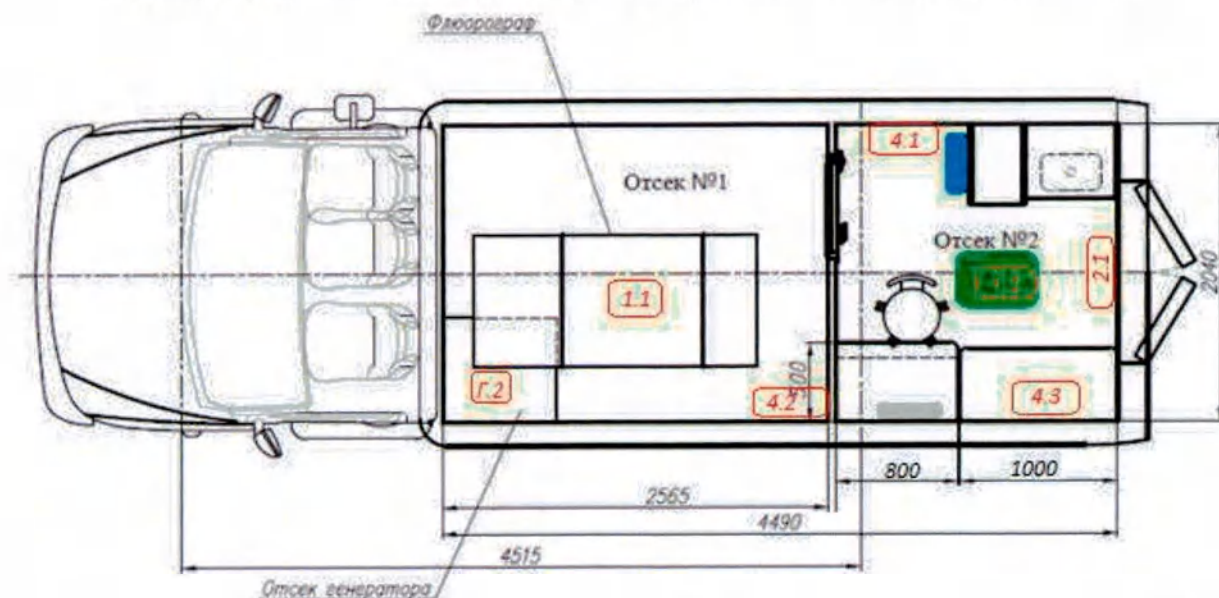


Рисунок Г.12.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

Г.1 - внешний блок кондиционера;

Г.2 - электрогенераторная установка;

1.1 - флюорограф;

2.1 - промышленная воздушная завеса;

4.1 - прибор приемно-контрольный охранный;

4.2 - фильтровентиляционная установка;

4.3 - воздушный отопитель.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Флюорография» на базе транспортного средства ПМК-48415К (Рисунок Г.13)

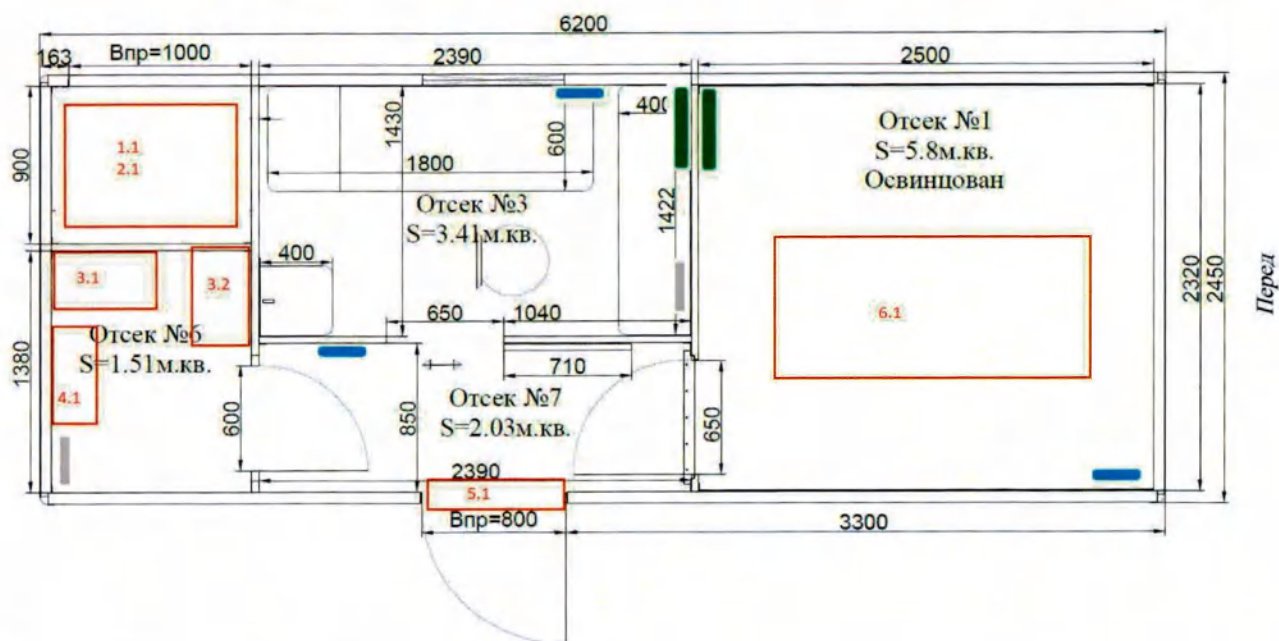


Рисунок Г.13.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

1.1 - внешний блок кондиционера;

2.1 - электрогенераторная установка;

3.1 - преобразователь напряжения;

3.2 - воздушный отопитель;


4.1 - фильтровентиляционная установка;

5.1 - промышленная воздушная завеса;

6.1 - флюорограф;

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Маммография» на базе транспортного средства ПМК-48415К (Рисунок Г.14)

Рисунок Г.14.

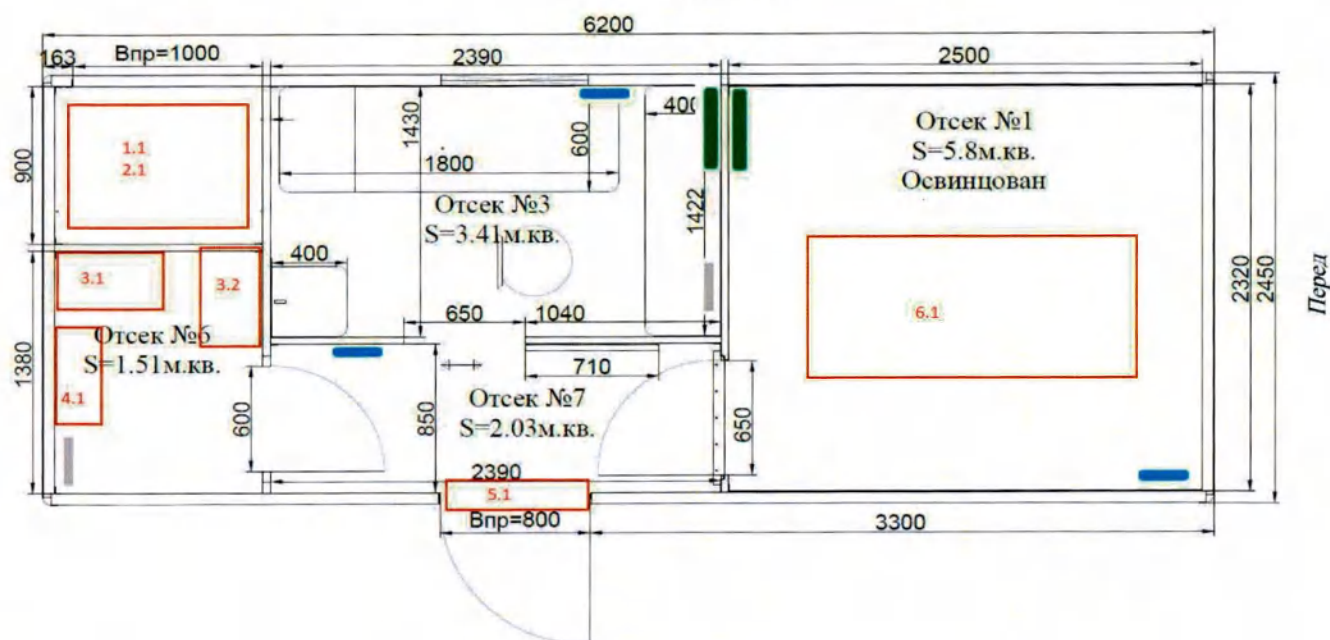

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

1.1 - внешний блок кондиционера;

2.1 - электрогенераторная установка;

3.1 - преобразователь напряжения;

3.2 - воздушный отопитель;

4.1 - фильтровентиляционная установка;

5.1 - промышленная воздушная завеса;

6.1 - флюорограф;

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

пятьдесят девять листов

Генеральный директор
подпись Горобец С.Л.



СОДЕРЖАНИЕ

О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЗНАКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОМПЛЕКСЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОМПЛЕКСА

1.1.1. Назначение

1.1.2. Показания к применению

1.1.3. Противопоказания

1.1.4. Технические характеристики

1.1.5. Устройство и работа

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1.1. Требования безопасности

2.1.2. Выбор места и стоянка Комплекса

2.1.3. Сборка трапа:

Вариант трапа 1

Вариант трапа 2

2.1.4. Подключение к электропитанию

2.1.5. Освещение

2.1.6. Системы жизнеобеспечения

2.1.7. Медицинское и другое оборудование Комплекса

2.1.7.1. Транспортное и рабочее положение оборудования и мебели

2.1.7.2. Крепление мебели при транспортном положении

2.1.7.3. Пример транспортного расположения и крепления медицинского оборудования

2.2. ПОДГОТОВКА И ПРИВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2.2.1. Подготовка

2.2.2. Приведение Комплекса в транспортное положение

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА.

6. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

7. ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

8. УТИЛИЗАЦИЯ

9. РЕКЛАМАЦИЯ

10. СПИСОК МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАЗРЕШЕННЫЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В КОМПЛЕКСЕ

Приложение 1. Габаритные размеры оборудования, устанавливаемого в комплексе.

Приложение 2. Назначение медицинских изделий и специального оборудования, используемых в Комплексе

Приложение 3. Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе.

Указания по электромагнитной совместимости (ЭМС)

Указания и декларация соответствия Материалы поверхностей, предполагающие контакт с телом пациента и медперсонала

О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

Руководство описывает Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» по ТУ 29.10.59-010-37600580-2017 в следующих исполнениях: «Диспансеризация» на базе транспортного средства АМС-49415Н или VFM6АО или ПМК-48415Н, «Профосмотр» на базе транспортного средства 972200, «Лучевая диагностика» на базе транспортного средства АЛ-59860С-2, «Стоматология» на базе транспортного средства АФ-47434А, «Офтальмология» на базе транспортного средства АФ-371703, «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 878913, 185514 или 692732, «Флюорография» на базе транспортного средства 385527 или ПМК-48415К, «Маммография» на базе транспортного средства ПМК-48415К

Комплект документации при поставке (на русском языке):

- Руководство по эксплуатации на Комплекс
- Паспорт на Комплекс
- Сервисная книжка на Комплекс
- Инструкции (руководства по эксплуатации), паспорта на всё медицинское и специальное оборудование в комплекте с изделием, входящих в состав Комплекса
- Эксплуатационная документация на транспортное средство

В данном руководстве для обозначения потенциально опасной или способной причинить вред ситуации или процедуры, а также для указания на ситуацию или действия, представляющие опасность для пациента и/или пользователя, используется выделение текста красным цветом.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ!

Испытание электромагнитной совместимости Комплекса было произведено в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014. Применение мобильных радиочастотных средств связи может оказывать воздействие на МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Комплекс НЕ является источником электромагнитных помех и НЕ требует применения специальных мер, для обеспечения электромагнитной совместимости

ВНИМАНИЕ! Во избежание риска поражения электрическим током, Комплекс должен быть подключен только к сети питания с защитным заземлением.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством и работой Комплекса медицинского передвижного «МЕДКАР» по ТУ 29.10.59-010-37600580-2017 в следующих исполнениях: «Диспансеризация» на базе транспортного средства АМС-49415Н, или VFM6АО или ПМК-48415Н, «Профосмотр» на базе транспортного средства 972200, «Лучевая диагностика» на базе транспортного средства АЛ-59860С-2, «Стоматология» на базе транспортного средства АФ-47434А, «Офтальмология» на базе транспортного средства АФ-371703, «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 878913, 185514 или 692732, «Флюорография» на базе транспортного средства 385527 или ПМК-48415К, «Маммография» на базе транспортного средства ПМК-48415К и содержит сведения, необходимые для его правильной эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

При изучении и эксплуатации изделия, необходимо дополнительно руководствоваться эксплуатационной документацией на медицинское и специальное оборудование, эксплуатационную документацию на базовое транспортное средство и изотермический фургон, входящее в комплект документации при поставке.

Работы по вводу в эксплуатацию, контролю технического состояния, ремонту и техническому обслуживанию Комплекса должны выполняться квалифицированными специалистами.

ВНИМАНИЕ! Изделие, при определенных условиях, может представлять опасность для здоровья и жизни человека. Источники опасности:

- бортовая электросеть и электрооборудование - опасность поражения людей электрическим током;
- нагревательные приборы - пожаробезопасность, термические ожоги;
- падение с трапа.

Залогом безопасной и безаварийной работы является соблюдение правил работы и работа только на исправном и неповрежденном оборудовании.

В случае возникновения каких-либо затруднений, проблем или предложений, просьба обращаться в ЗАО «НПО «МЕДКАР»:

140104, Московская область, г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 62, ком. 206

Адрес производства: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Кооперативная, д. 10

Телефон: +7(495) 540-45-96, e-mail: med@medcar.ru

ЗНАКИ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ В КОМПЛЕКСЕ

ЗНАК	ЗНАЧЕНИЕ
	Знаки I и O на электрошите – включение (ON) и выключение (OFF) соответственно.
	Заземление.
	Осторожно! Высокое напряжение!
	Изготовитель.
	Дата изготовления.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОМПЛЕКСА

1.1.1 Назначение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством и работой Комплекса медицинского передвижного «МЕДКАР» по ТУ 29.10.59-010-37600580-2017 в следующих исполнениях: «Диспансеризация» на базе транспортного средства АМС-49415Н, или VFM6АО или ПМК-48415Н, «Профосмотр» на базе транспортного средства 972200, «Лучевая диагностика» на базе транспортного средства АЛ-59860С-2, «Стоматология» на базе транспортного средства АФ-47434А, «Офтальмология» на базе транспортного средства АФ-371703, «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 878913, 185514 или 692732, «Флюорография» на базе транспортного средства 385527 или ПМК-48415К, «Маммография» на базе транспортного средства ПМК-48415К. (далее Комплекс) предназначен для применения в медицинских целях при установке его по месту временной дислокации и не предназначен для применения в медицинских целях при перевозках или перемещении.

Комплекс изготавливается в восьми вариантах исполнения, в зависимости от назначения и комплектации и оснащен следующими медицинскими кабинетами:

- Кабинет «Диагностика»;
- Кабинет «Офтальмология»;
- Кабинет «Женское здоровье»;
- Кабинет «Стоматология»;
- Кабинет «Лаборатория»;
- Кабинет «Маммография»;
- Кабинет «Рентгенодиагностика».

Варианты исполнения:

1. «Диспансеризация» - предназначен для проведения комплекса мероприятий в системе здравоохранения с целью выявления и предупреждения развития различных заболеваний у населения. Состоит из кабинетов: «Диагностика», «Лаборатория», «Женское здоровье» и «Рентгенодиагностика». Размещается на базе транспортного средства АМС-49415Н, или VFM6АО или ПМК-48415Н.

2. «Профосмотр» - предназначен для проведения обязательного медицинского обследования, определяющего возможности человека работать в определенных производственных условиях. Состоит из кабинетов: «Офтальмология» или «Стоматология», «Лаборатория», «Диагностика», «Женское здоровье», «Рентгенодиагностика», «Маммография». Размещается на базе транспортного средства 972200.

3. «Лучевая диагностика» - предназначен для проведения скрининга молочных желез и грудной клетки. Состоит из кабинетов: «Маммография» и «Рентгенодиагностика». Размещается на базе транспортного средства АЛ-59860С-2.

4. «Стоматология» - предназначен для терапевтического приема с целью профилактики и лечения полости рта. Состоит из кабинетов: «Стоматология». Размещается на базе транспортного средства АФ-47434А.

5. «Офтальмология» - предназначен для диагностики, профилактики и назначения лечения органов зрения. Состоит из кабинетов: «Офтальмология». Размещается на базе транспортного средства АФ-371703.

6. «Фельдшерско-акушерский пункт» - предназначен для первичной доврачебной медико-санитарной помощи. Состоит из кабинетов: «Диагностика» и «Женское здоровье». Размещается на базе транспортного средства 878913, 185514 или 692732.

7. «Флюорография» - предназначен для проведения скрининга грудной клетки. Состоит из кабинетов: «Рентгенодиагностика». Размещается на базе транспортного средства 385527 или 48415К.

8. «Маммография» - предназначен для проведения скрининга молочной железы. Состоит из кабинетов: «Маммография». Размещается на базе транспортного средства 48415К.

1.1.2 Показания к применению

Комплекс показан к применению медицинскими организациями (иными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность и имеющими лицензии на осуществление медицинской деятельности) независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими оказание гражданам первичной медико-санитарной помощи. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

1.1.3 Противопоказания

Не допускается использования Комплекса не по назначению, перед применением необходимо ознакомиться с оригинальным руководством по эксплуатации на Комплекс и инструкциями (руководствами по эксплуатации), паспортами на все медицинские приборы и системы жизнеобеспечения в комплекте с изделием, входящими в состав документации на Комплекс.

1.1.4 Технические характеристики

А) Конструкция Комплекса

Комплекс представляет собой фургон изотермический, или контейнер, или КУНГ (далее Кузов), состоящий из медицинских кабинетов (далее Кабинеты), коридора, генераторного отсека, отсека под внешний блок кондиционера и хозяйственного отсека (с возможностью размещения биотуалета).

Комплекс изготавливается в семи вариантах исполнения, в зависимости от назначения и комплектации и оснащен следующими медицинскими кабинетами:

- Кабинет «Диагностика»;
- Кабинет «Офтальмология»;
- Кабинет «Женское здоровье»;
- Кабинет «Стоматология»;
- Кабинет «Лаборатория»;
- Кабинет «Маммография»;
- Кабинет «Рентгенодиагностика».

Варианты исполнения:

1. «Диспансеризация» - предназначен для проведения комплекса мероприятий в системе здравоохранения с целью выявления и предупреждения развития различных заболеваний у населения. Состоит из кабинетов: «Диагностика», «Лаборатория», «Женское здоровье» и «Рентгенодиагностика». Размещается на базе транспортного средства АМС-49415Н, или VFM6AO или ПМК-48415Н.

2. Профосмотр» - предназначен для проведения обязательного медицинского обследования, определяющего возможности человека работать в определенных производственных условиях. Состоит из кабинетов: «Офтальмология» или «Стоматология», «Лабо-

тория», «Диагностика», «Женское здоровье», «Рентгенодиагностика», «Маммография». Размещается на базе транспортного средства 972200.

3. «Лучевая диагностика» - предназначен для проведения скрининга молочных желез и грудной клетки. Состоит из кабинетов: «Маммография» и «Рентгенодиагностика». Размещается на базе транспортного средства АЛ-59860С-2.

4. «Стоматология» - предназначен для терапевтического приема с целью профилактики и лечения полости рта. Состоит из кабинетов: «Стоматология». Размещается на базе транспортного средства АФ-47434А.

5. «Офтальмология» - предназначен для диагностики, профилактики и назначения лечения органов зрения. Состоит из кабинетов: «Офтальмология». Размещается на базе транспортного средства АФ-371703.

6. «Фельдшерско-акушерский пункт» - предназначен для первичной доврачебной медико-санитарной помощи. Состоит из кабинетов: «Диагностика» и «Женское здоровье». Размещается на базе транспортного средства 878913, 185514 или 692732.

7. «Флюорография» - предназначен для проведения скрининга грудной клетки. Состоит из кабинетов: «Рентгенодиагностика». Размещается на базе транспортного средства 385527 или 48415К

8. «Маммография» - предназначен для проведения скрининга молочной железы. Состоит из кабинетов: «Маммография». Размещается на базе транспортного средства 48415К.

Б) Системы жизнеобеспечения

Каждый Комплекс оснащается комплектом систем жизнеобеспечения:

1. системой электроснабжения от внешней сети электрического тока и автономных источников питания, таких как: генераторная установка, аккумуляторные батареи; преобразователь 24/220 (380) В, преобразователь 12/220 (380) В;
2. системой освещения 12/24 В, и 220/380 В;
3. системой водоснабжения;
4. системой автономного воздушного отопления;
5. системами приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования;
6. системой противопожарного оповещения с пультом управления, комплектом датчиков и звуковым извещателем.

В) Паспортные данные

Наименование Комплекса, состав кабинетов; наименование шасси; обозначение ТУ; наименование предприятия-изготовителя; заводской номер; год изготовления указаны на идентификационной табличке, размером 15 см x 20 см (Рисунок 1), расположенной на входной двери в Комплекс в верхнем левом углу.

Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР»
по ТУ 29.10.59-010-37600580-2017 в следующих исполнениях:

- ☐ «Диспансеризация» на базе транспортного средства АМС-49415Н
- ☐ «Диспансеризация» на базе транспортного средства VFM6АО
- ☐ «Диспансеризация» на базе транспортного средства ПМК-48415Н
- ☐ «Профосмотр» на базе транспортного средства 972200
- ☐ «Лучевая диагностика» на базе транспортного средства АЛ-59860С-2
- ☐ «Стоматология» на базе транспортного средства АФ-47434А
- ☐ «Офтальмология» на базе транспортного средства АФ-371703
- ☐ «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 878913
- ☐ «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 185514
- ☐ «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 692732
- ☐ «Флюорография» на базе транспортного средства 385527
- ☐ «Флюорография» на базе транспортного средства ПМК-48415К
- ☐ «Маммография» на базе транспортного средства ПМК-48415К

Вид планировки: _ _ _ _
Заводской номер: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Год выпуска: _ _ _ _
Номинальное напряжение 220В; номинальная частота 50Гц;
Номинальная входная мощность _ _ кВт.

 Предприятие-изготовитель: ЗАО «НПО «МЕДКАР»
140104, Московская область, г. Раменское, ул. Москворецкая, д.62, ком. 206
Телефон: +7 (495) 540-45-96 E-mail: med@medcar.ru Сайт: www.medcar.ru

Рисунок 1. Идентификационная табличка Комплекса.

1.1.5 Устройство и работа

А) Комплекс представляет собой изотермический фургон (далее Кузов) со стационарно размещенным в нем медицинским и специальным оборудованием.

Б) Комплекс размещается в следующих транспортных средствах:

- АМС-49415Н, 972200, АЛ-59860С-2, АФ-47434А, АФ-371703, VFM6АО, 878913, 185514, 692732, 385527, ПМК-48415Н, ПМК-48415К;

В) К Комплексу прикладывается четыре комплекта ключей (Рисунок 2):

- два комплекта к кабине транспортного средства;
- два комплекта к Кузову и инструментальным ящикам.



Рисунок 2. Два комплекта ключей: к кабине транспортного средства и к Кузову с инструментальными ящиками с фирменным брелоком.

Г) Двери Комплекса оснащены замками и открываются индивидуальными ключами.

Ключи для инструментальных ящиков имеют номера, соответствующие номерам нанесенных на замках.

Д) Комплекс разделен перегородками (Рисунки 3-А, 3-А.1, 3-Б, 3-В, 3-Г, 3-Д, 3-Ж, 3-З, 3-И, 3-К, 3-Л, 3-Л1, 3-М):

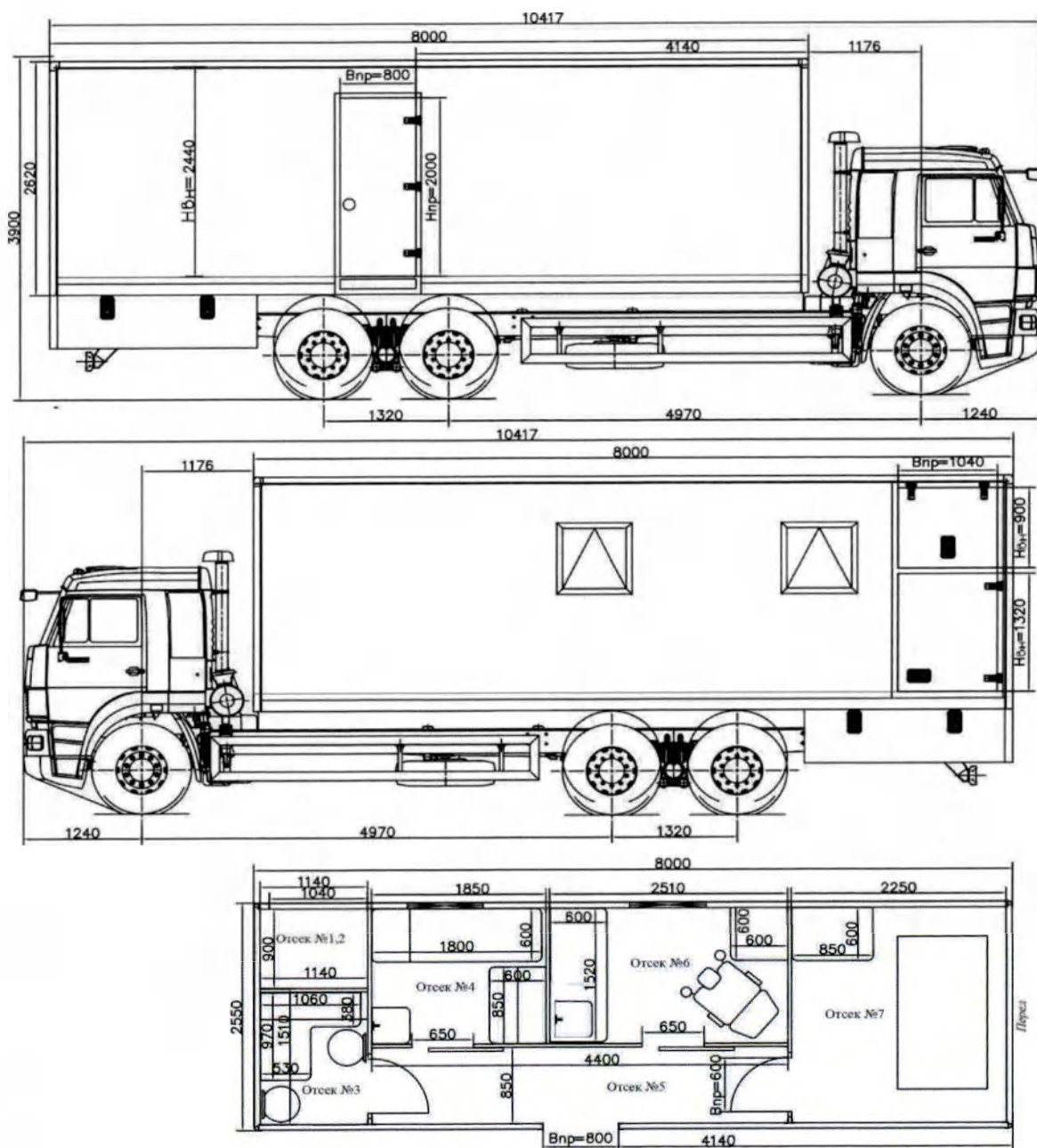


Рисунок 3-А. Схема планировки Комплекса «Диспансеризация»

на базе транспортного средства АМС-49415Н или VFM6АО

1. Генераторный отсек, (высота помещения = 1320 мм)
2. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)
3. Кабинет 1 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
4. Кабинет 2 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
5. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)
6. Кабинет 3 (Женское здоровье), (высота помещения = 2440 мм)
7. Кабинет 4 (Рентгенодиагностика), (высота помещения = 2440 мм)

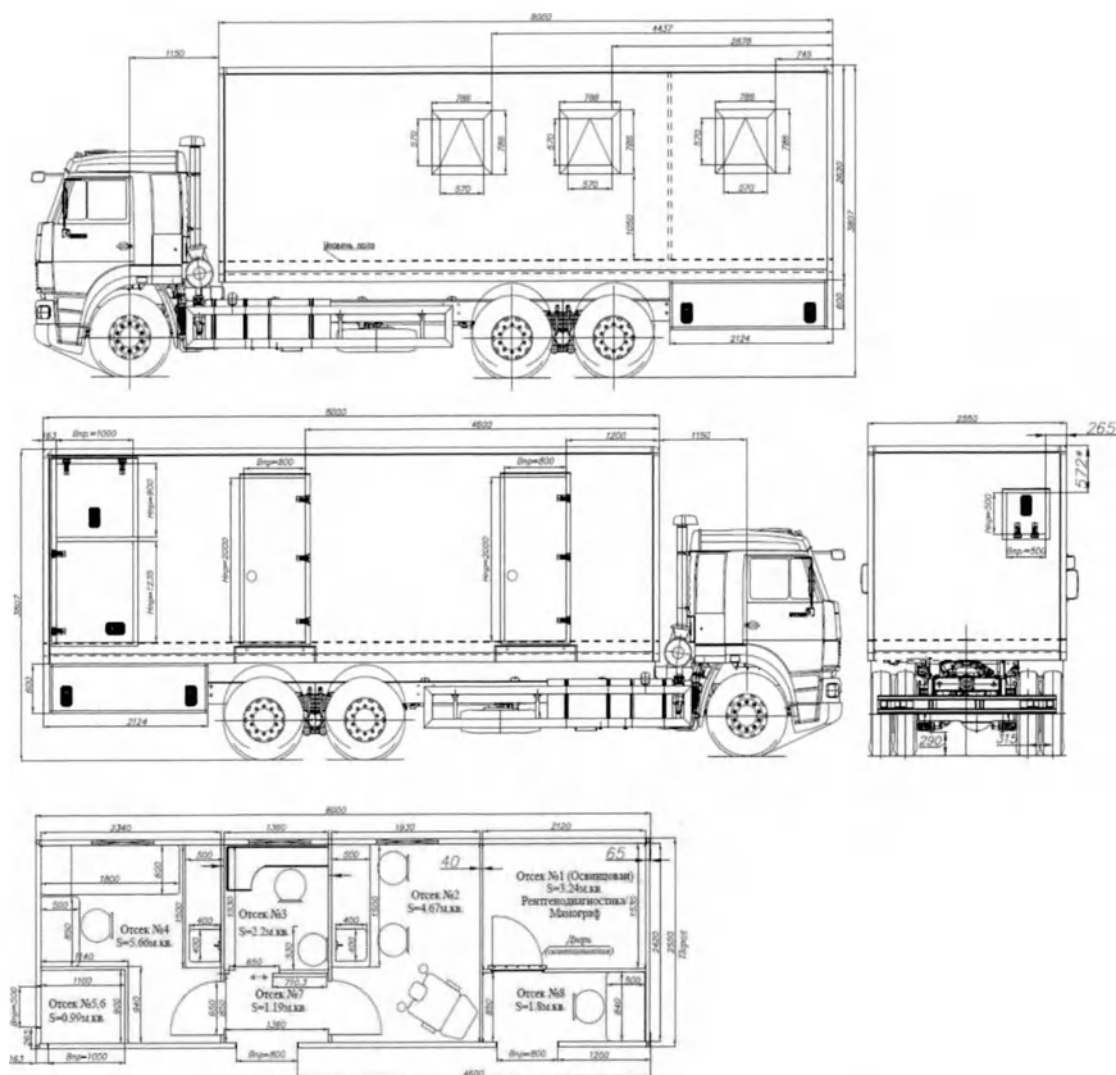


Рисунок 3-А.1. Схема планировки Комплекса «Диспансеризация» на базе транспортного средства ПМК-48415Н

1. Генераторный отсек, (высота помещения = 1320 мм)
2. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)
3. Кабинет 1 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
4. Кабинет 2 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
5. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)
6. Кабинет 3 (Женское здоровье), (высота помещения = 2440 мм)
7. Кабинет 4 (Рентгенодиагностика/Маммография), (высота помещения = 2440 мм)

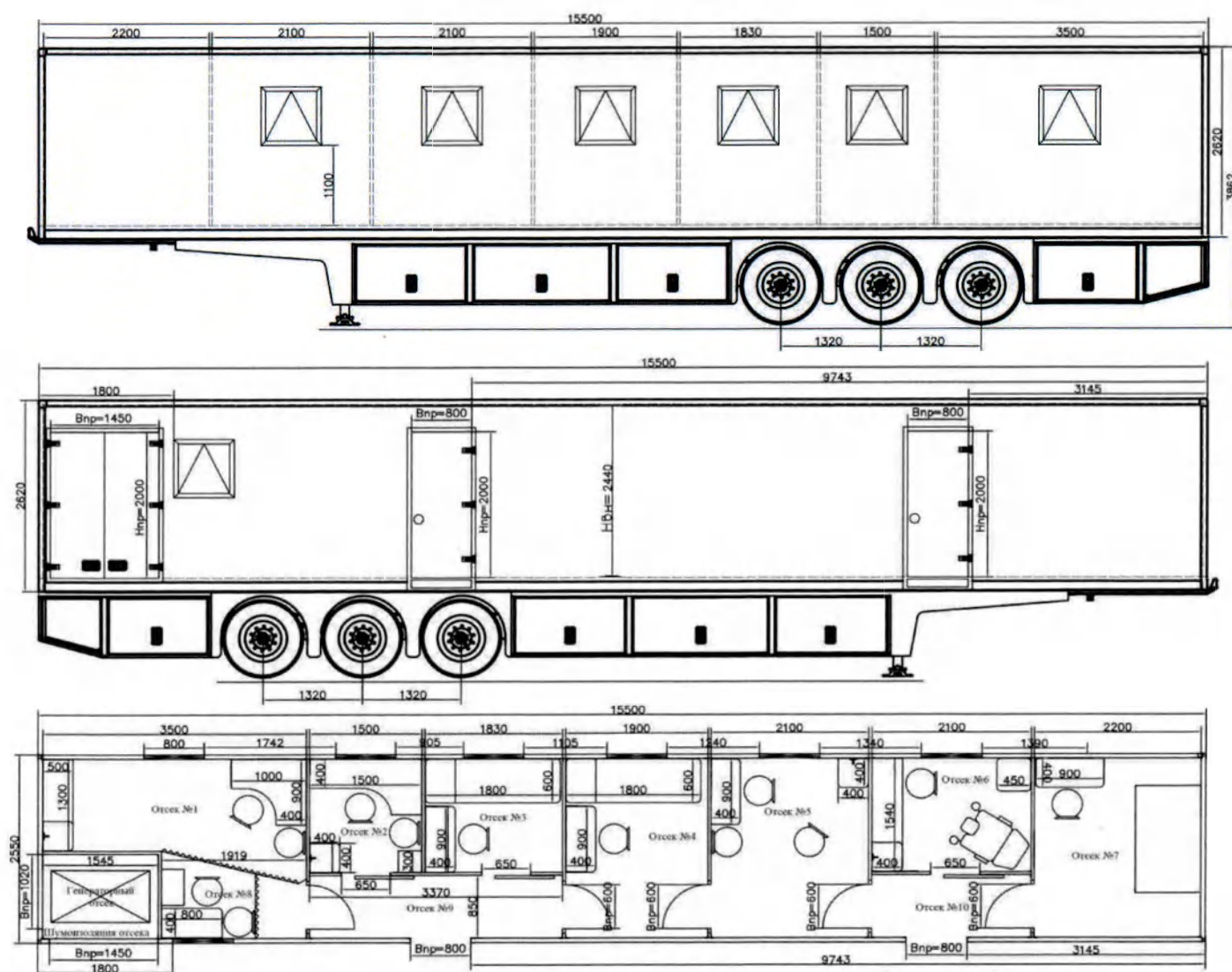


Рисунок 3-Б. Схема планировки Комплекса «Профосмотр»
на базе транспортного средства 972200 планировка 1.

1. Кабинет 1 (Офтальмология), (высота помещения = 2440 мм)
 2. Кабинет 2 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
 3. Кабинет 3 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
 4. Кабинет 4 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
 5. Кабинет 5 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
 6. Кабинет 6 (Женское здоровье), (высота помещения = 2440 мм)
 7. Кабинет 7 (Рентгенодиагностика), (высота помещения = 2440 мм)
 8. Кабинет 8 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
 9. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)
 10. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)
- Генераторный отсек (высота помещения = 2440 мм)

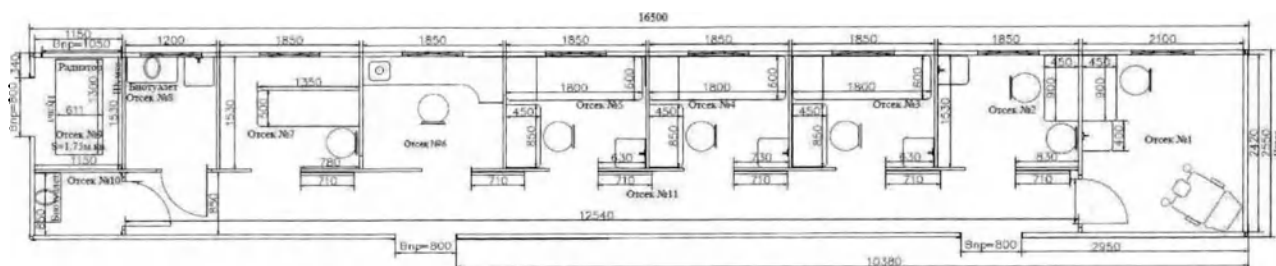


Рисунок 3-В. Схема планировки Комплекса «Профосмотр»

на базе транспортного средства 972200 планировка 2.

1. Кабинет 1 (Женское здоровье), (высота помещения = 2440 мм)
2. Кабинет 2 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
3. Кабинет 3 (Офтальмология), (высота помещения = 2440 мм)
4. Кабинет 4 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
5. Кабинет 5 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
6. Кабинет 6 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
7. Кабинет 7 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
8. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
9. Генераторный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
10. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
11. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)

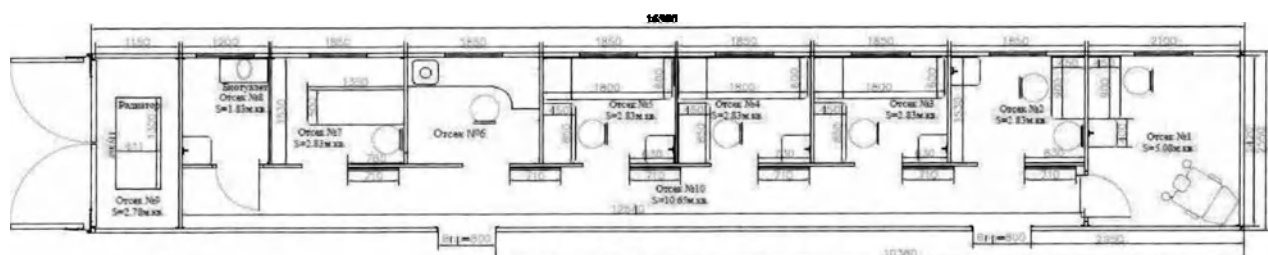


Рисунок 3-Г. Схема планировки Комплекса «Профосмотр»

на базе транспортного средства 972200 планировка 3.

1. Кабинет 1 (Женское здоровье), (высота помещения = 2440 мм)
2. Кабинет 2 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
3. Кабинет 3 (Офтальмология), (высота помещения = 2440 мм)
4. Кабинет 4 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
5. Кабинет 5 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
6. Кабинет 6 (Лаборатория), (высота помещения = 2440 мм)
7. Кабинет 7 (Диагностика), (высота помещения = 2440 мм)
8. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
9. Генераторный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
10. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)

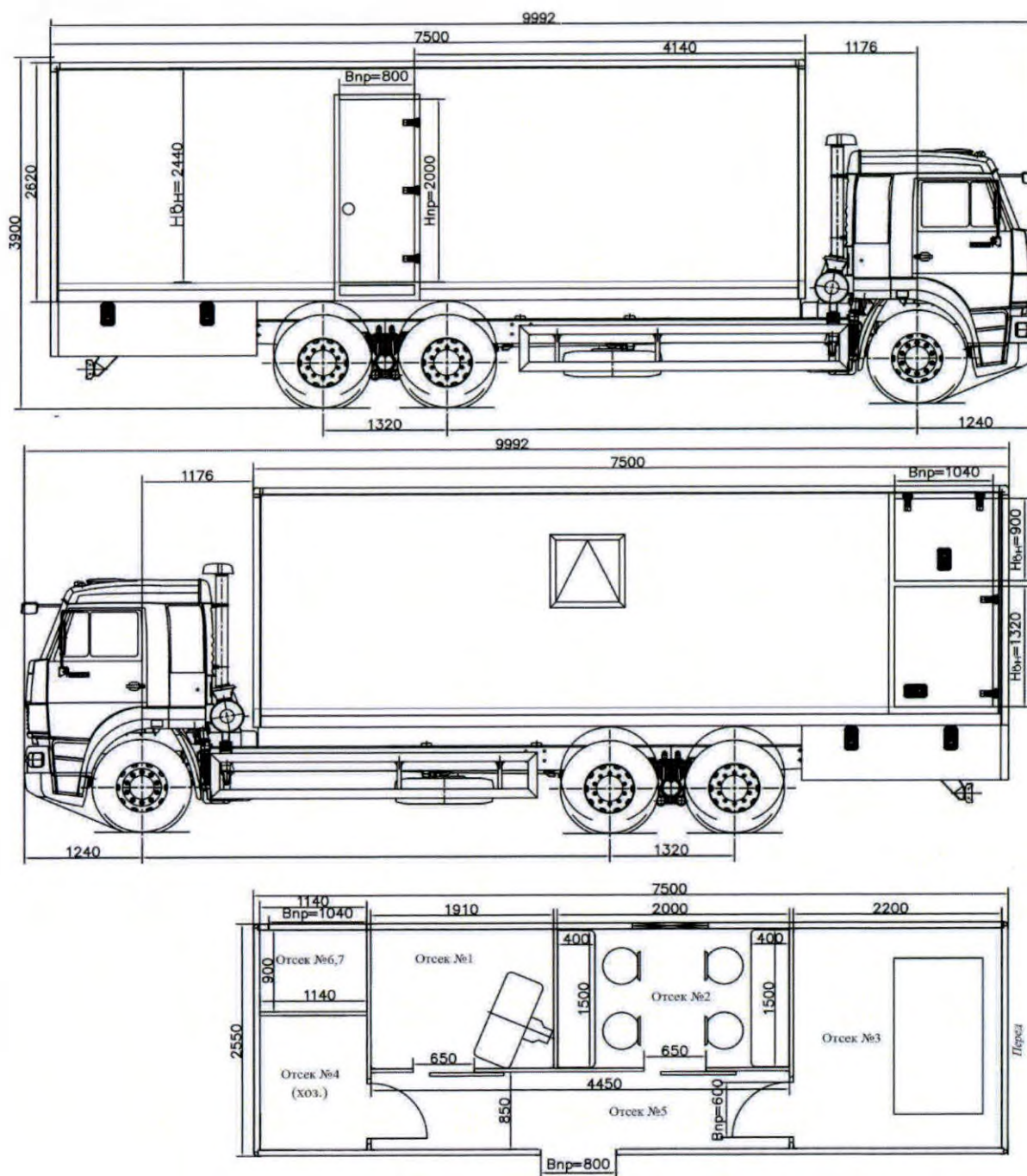


Рисунок 3-Д. Схема планировки Комплекса «Лучевая диагностика» на базе транспортного средства АЛ-59860С-2.

1. Кабинет 1 (Маммография), (высота помещения = 2440 мм)
2. Кабинет 2 (Рабочие места маммолога и рентгенолога), (высота помещения = 2440 мм)
3. Кабинет 3 (Рентгенодиагностика), (высота помещения = 2440 мм)
4. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2440 мм)
5. Коридор, (высота помещения = 2440 мм)
6. Генераторный отсек, (высота помещения = 1320 мм)
7. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)

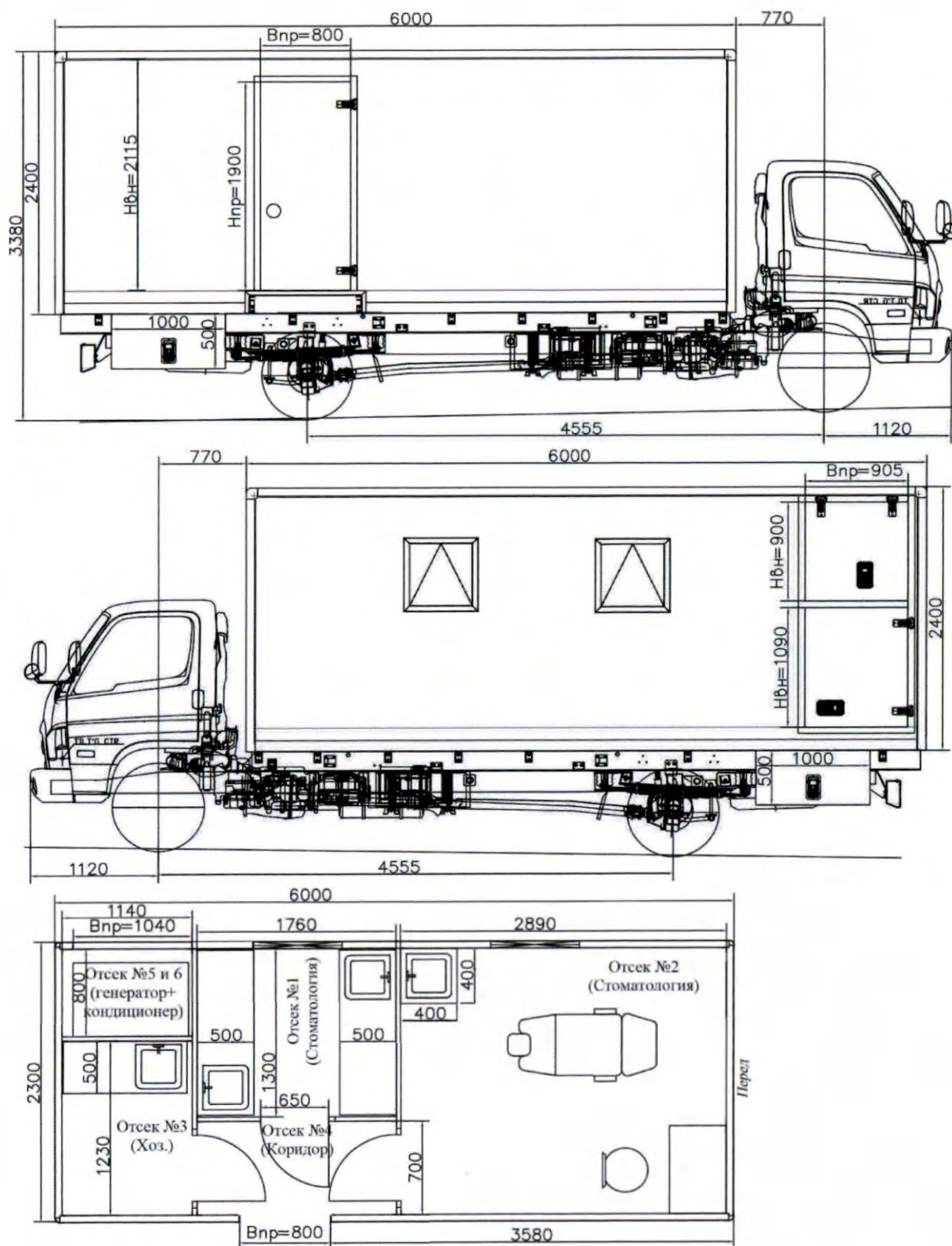


Рисунок 3-Е. Схема планировки Комплекса «Стоматология»
на базе транспортного средства АФ-47434А.

1. Кабинет 1 (Стоматология), (высота помещения = 2115 мм)
2. Кабинет 2 (Стоматология), (высота помещения = 2115 мм)
3. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2115 мм)
4. Коридор, (высота помещения = 2115 мм)
5. Генераторный отсек, (высота помещения = 1090 мм)
6. Отсек кондиционера, (высота помещения = 900 мм)

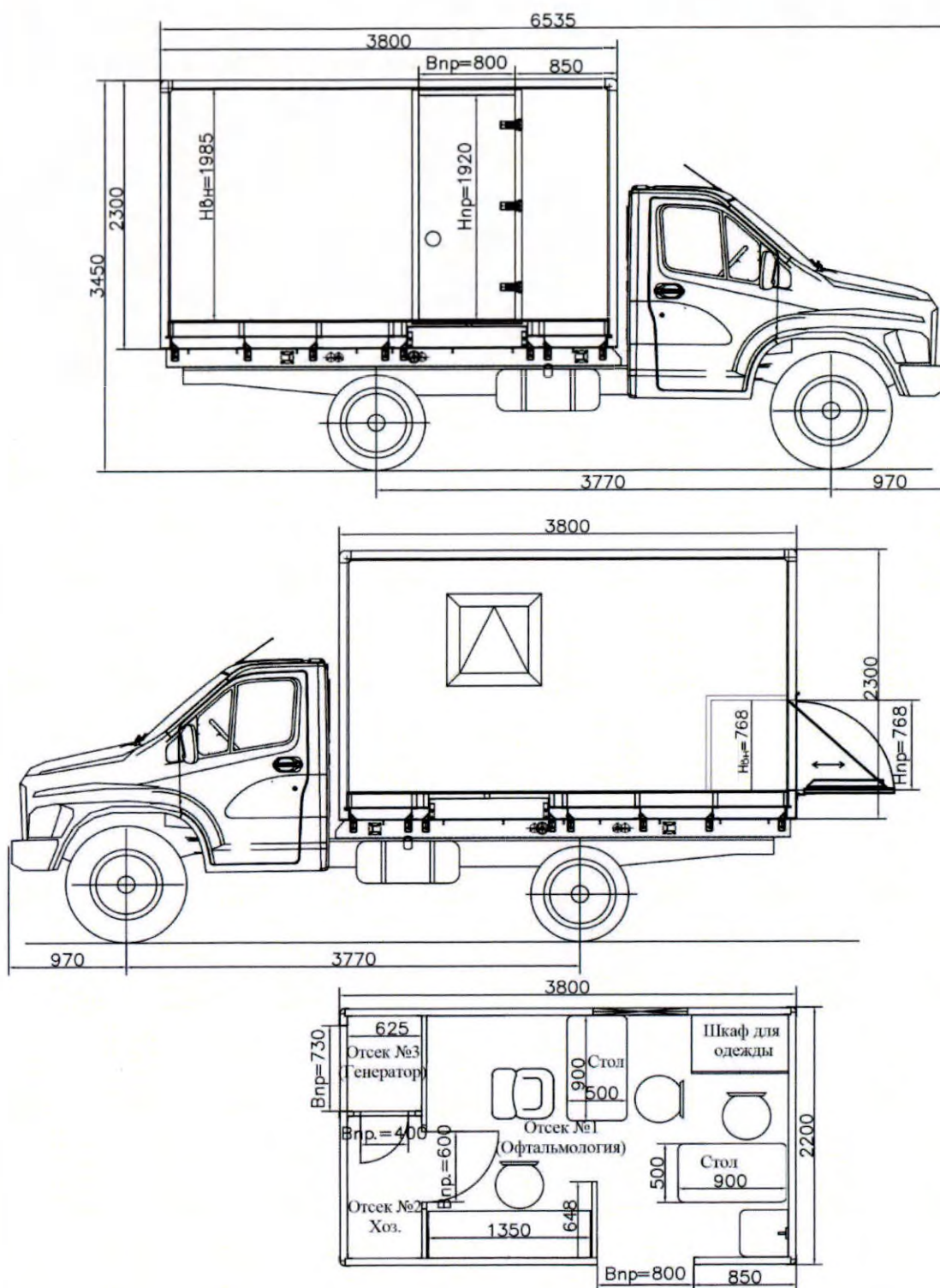


Рисунок 3-Ж. Схема планировки Комплекса «Офтальмология»
на базе транспортного средства АФ-371703.

1. Кабинет 1 (Офтальмология), (высота помещения = 1985 мм)
2. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 1985 мм)
3. Генераторный отсек, (высота помещения = 768 мм)

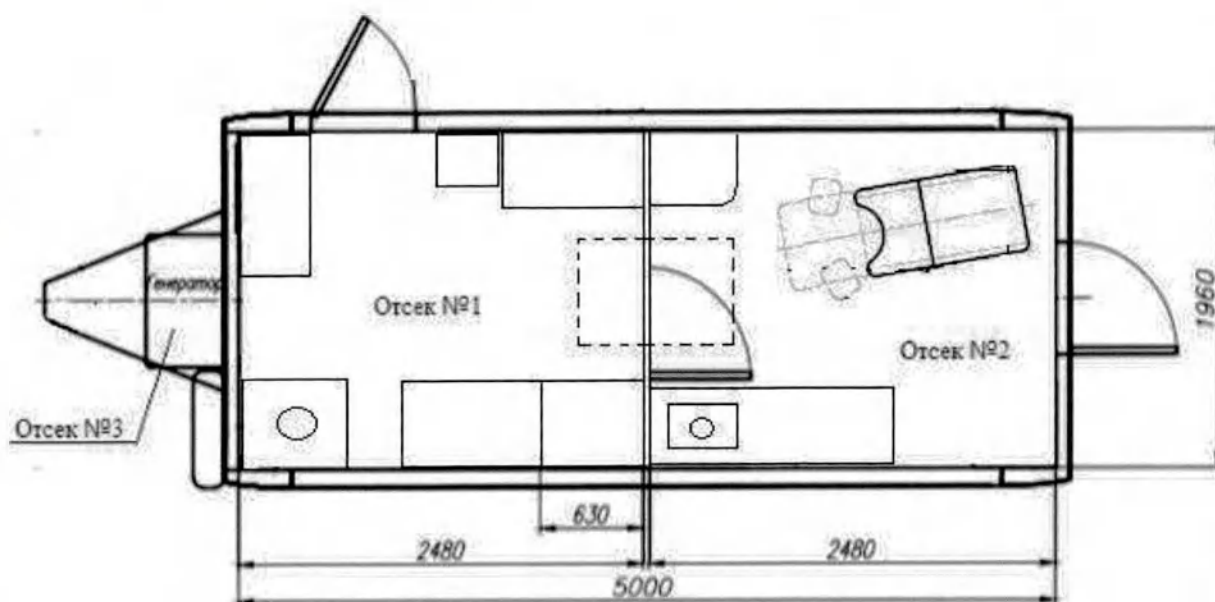


Рисунок 3-3. Схема планировки Комплекса «Фельдшерско-акушерский пункт»
на базе транспортного средства 878913

1. Кабинет (Диагностика), (высота помещения = 1950)
2. Кабинет (Женское здоровье), (высота помещения = 1950)
3. Генераторный отсек, (высота помещения = 800)

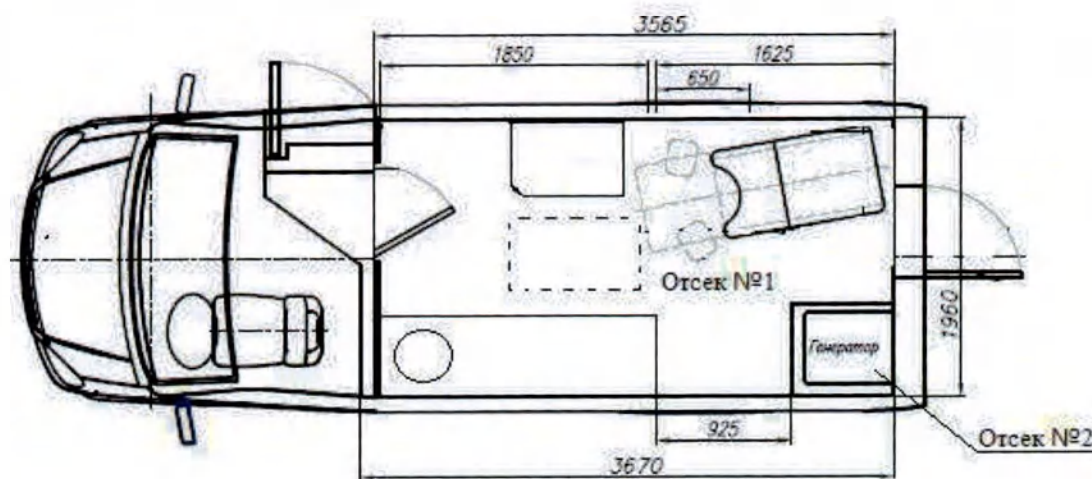


Рисунок 3-И. Схема планировки Комплекса «Фельдшерско-акушерский пункт»
на базе транспортного средства 185514

1. Кабинет (Диагностика), (высота помещения = 1950)
2. Генераторный отсек, (высота помещения = 800)



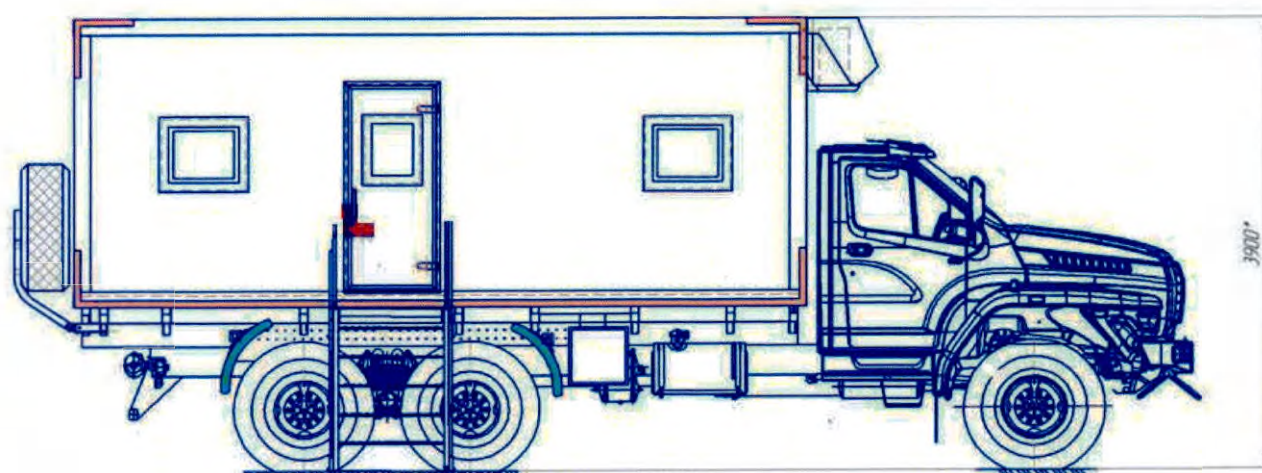


Рисунок 3-К. Схема планировки Комплекса «Фельдшерско-акушерский пункт»
на базе транспортного средства 692732

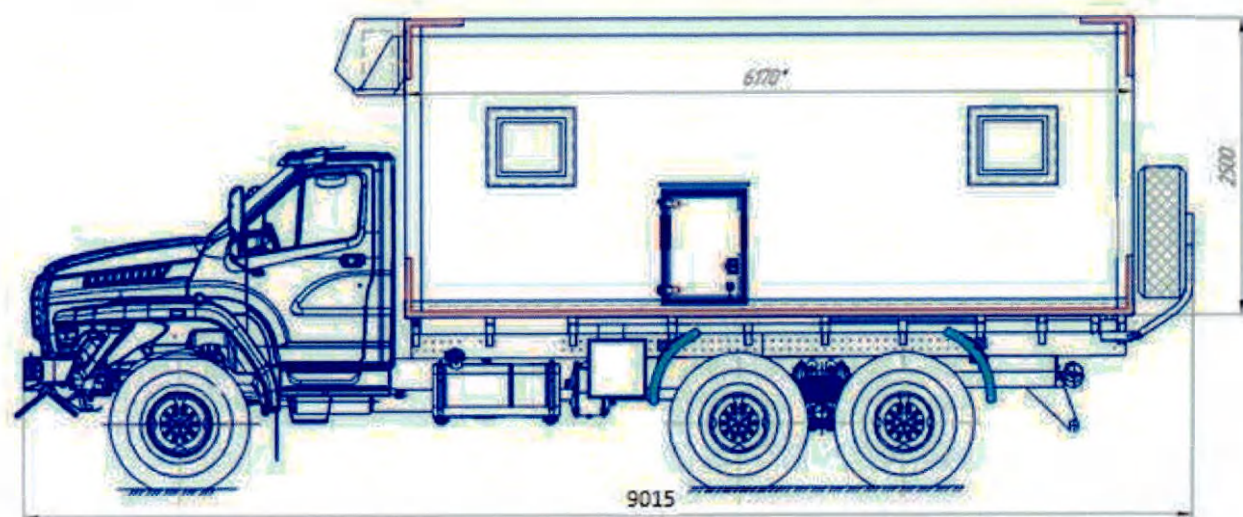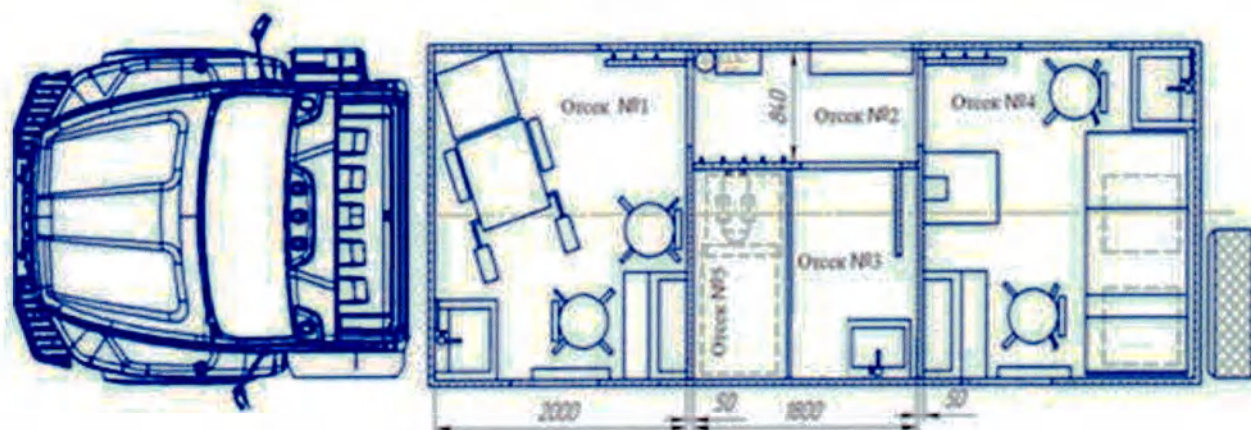

1. Кабинет (Женское здоровье), (высота помещения = 2340)
2. Коридор, (высота помещения = 2340)
3. Хозяйственный отсек, (высота помещения = 2340)
4. Кабинет (Диагностика), (высота помещения = 2340)
5. Генераторный отсек, (высота помещения = 1000)

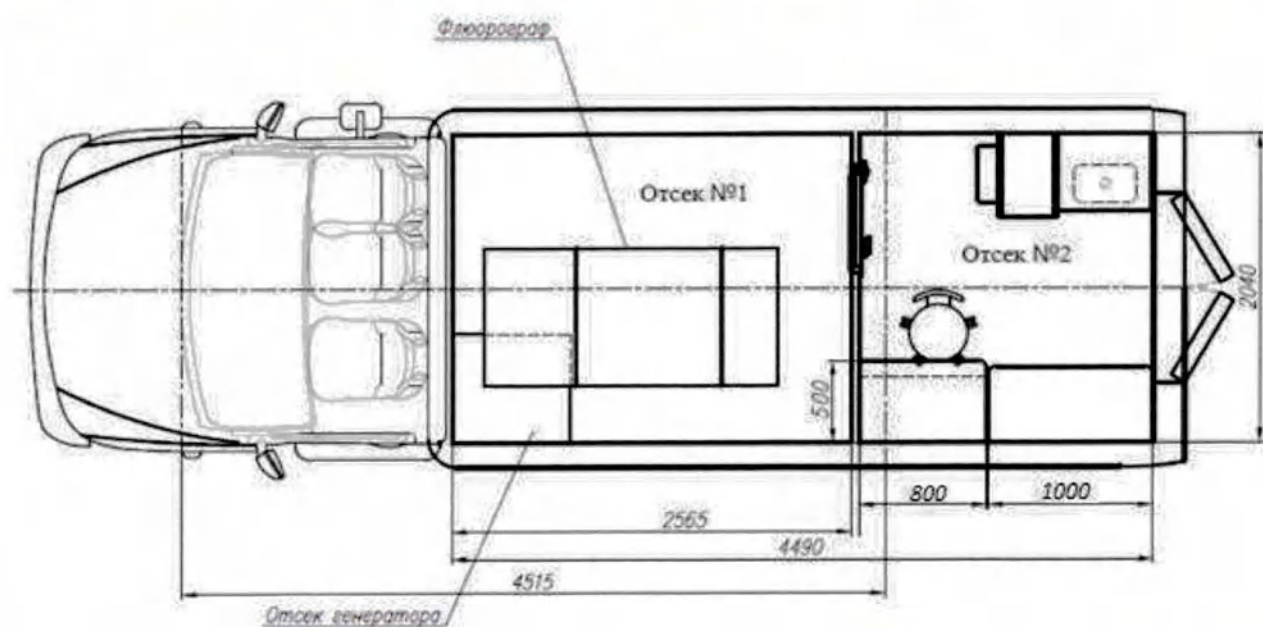


Рисунок 3-Л. Схема планировки Комплекса «Флюорография»
на базе транспортного средства 385527.

1. Кабинет 1 (Рентгенодиагностика), (высота помещения = 1900 мм)
2. Кабинет 2 (Рабочее место рентгенолога), (высота помещения = 1900мм)

Схема планировки Комплекса «Маммография» на базе транспортного средства ПМК-48415К (Рисунок Б.13).

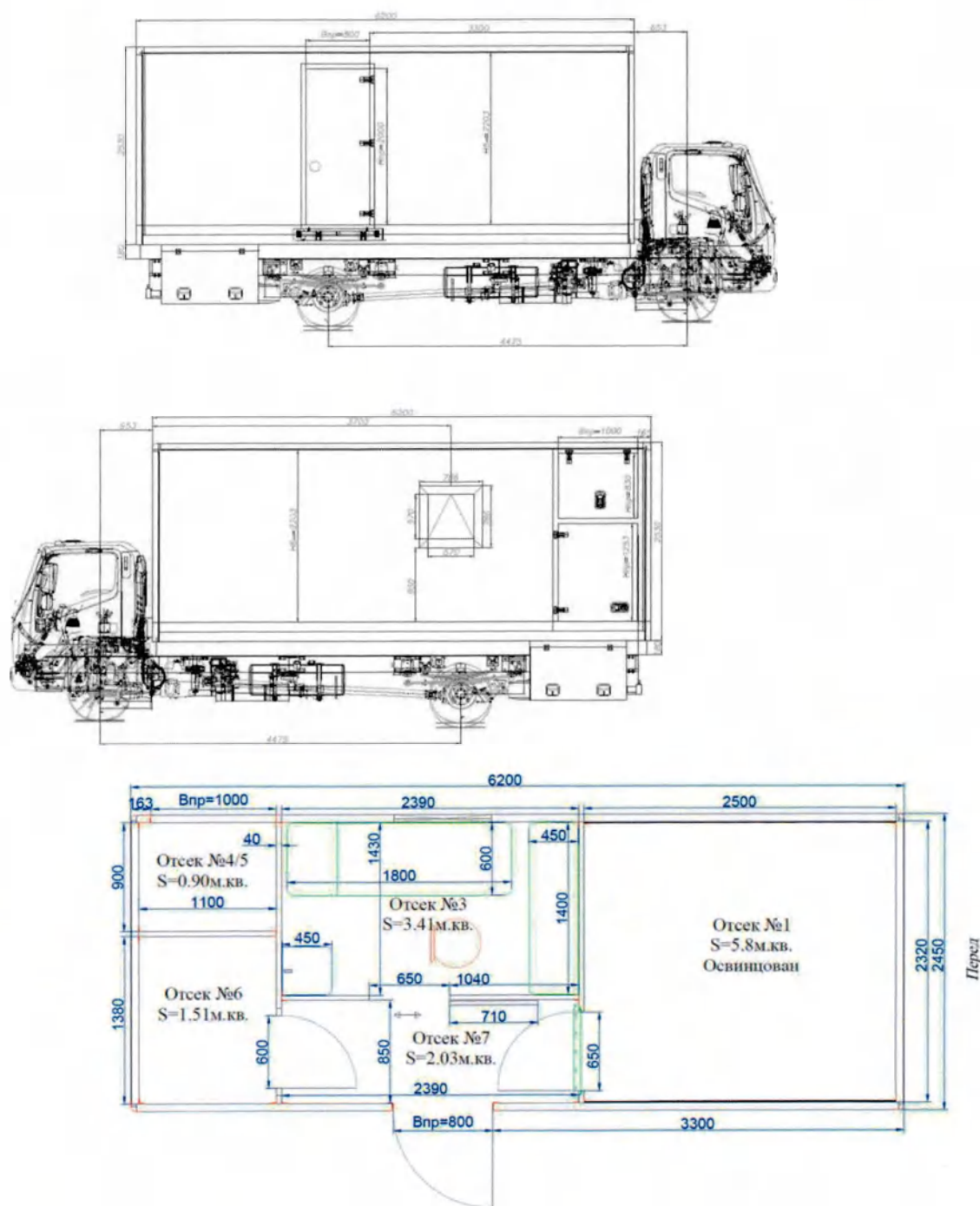


Рисунок 3-М. Схема планировки Комплекса «Маммография» на базе транспортного средства ПМК-48415К.

1. Кабинет 1 (Маммография), (высота помещения = 2203 мм)
2. Кабинет 3 (Рабочее место рентгенолога), (высота помещения = 2203 мм)
3. Хозяйственный отсек Отсек - 6, (высота помещения = 2203)
4. Генераторный отсек, (высота помещения = 1253)
5. Отсек кондиционера, (высота помещения = 830 мм)
6. Коридор, Отсек 7 (высота помещения = 2203 мм)

- кабинеты оборудованы медицинскими приборами и медицинской мебелью согласно Паспорту на Комплекс, входящим в комплект документации при поставке, расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе указано на схемах в Приложении 3.

- коридор оборудован вешалками для одежды.

- хозяйственный отсек служит для хранения хозяйственного инвентаря и для складирования медицинского оборудования при приведении его в транспортное положение (с возможностью размещения биотуалета), так же в отсеке может находиться вводной и распределительный электрощиты, МАП, имеет возможность расположение климатической установки.

- в генераторном отсеке находится электрогенератор для автономного жизнеобеспечения Комплекса.

- в отсеке для кондиционера располагается головной блок кондиционера.

Внимание! Дверь отсека кондиционера остается открытой при включенной системе кондиционирования и системы вентиляции!

Е) Питание оборудования производится от сети 220/380 В 50 Гц через вводной электрощит, подключаемый к внешней электросети 220/380 В с помощью кабеля (в комплекте).

Подключение медицинских приборов к сети осуществляется через розетки красного цвета. Подключение бытовых приборов к сети осуществляется через розетки белого цвета. (Рисунок 60).

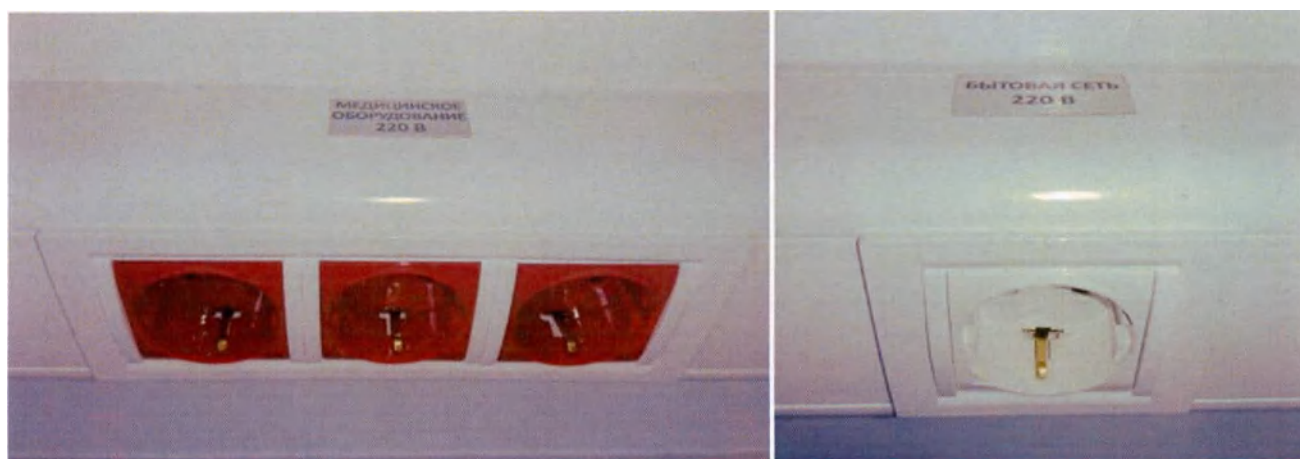


Рисунок 60. Электрические розетки.

Розетки комплекса имеют маркировку по ГОСТ Р МЭК 60601-1 с указанием следующей информации:

- номинального выходного напряжения в вольтах (220/380 В);
- номинального тока в амперах (2А).

Бортовая сеть защищена от перегрузок устройствами защитного отключения, которые одновременно предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям, предупреждения пожара при повреждении электроизоляции, для проведения тока в нормальном режиме и оперативным включении и отключении сети.

Подробно меры безопасности указаны в п.2.1.1 "Меры безопасности".

Ж) Для работы Комплекса могут быть использованы следующие источники питания:

- однофазная сеть переменного тока напряжением 220/380 В, частотой 50 Гц;
- автономный генератор 220/380 В, частотой 50 Гц, мощностью от 2 до 20 кВт;
- аккумуляторные батареи с общим напряжением 12 или 24 В через преобразователь напряжения 24(12)DC/220AC В мощностью не менее 2 кВт.

3) При невозможности подключения к внешней сети 220/380 В, в качестве источника питания Комплекса используется автономный электрогенератор 220/380 В, работающий на жидком топливе (Рисунок 4).

ВНИМАНИЕ! Запрещается закрывать дверь генераторного отсека при работающем электрогенераторе. Отработавшие газы токсичны!

Запрещается запускать генератор при выключенном вентиляторе дополнительного охлаждения и закрытыми защитными жалюзи! (Рисунок 5, 5.1)

Запускать генератор в гараже или другом замкнутом помещении ЗАПРЕЩАЕТСЯ!



Рисунок 4. Автономный электрогенератор.

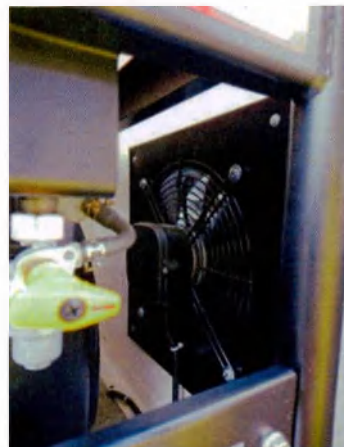


Рисунок 5. Вентилятор доп.охлаждения



Рисунок 5.1. Жалюзи защитные вентилятора доп.охлаждения

В зависимости от источника питающего напряжения необходимо включить нужный пусковой переключатель на вводном электрощите (Рисунок 6).



Рисунок 6. Вводной электрощит.

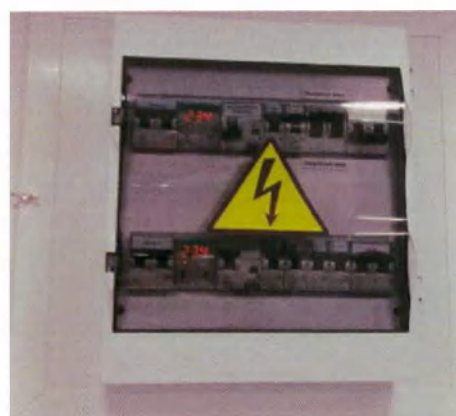


Рисунок 7. Вводный электрощит



Рисунок 7. Преобразователь напряжения 24/220 В

Электрощит имеет следующие символы и световые сигналы (ГОСТ Р МЭК 60601-1):

для левого переключателя:

- ГОРОД – при установке переключателя в данное положение происходит подача напряжения от внешней электросети. При наличии напряжения загорится зеленый световой индикатор «Город»;

- ВЫКЛ, либо «О» – при установке переключателя в данное положение Комплекс будет обесточен от внешних источников (внешней электросети и электрогенератора);

- ГЕНЕРАТОР - при установке переключателя в данное положение происходит подача напряжения от электрогенератора. При наличии напряжения загорится зеленый световой индикатор «Генератор»;

для правого переключателя:

- Основной ввод - при установке переключателя в данное положение происходит подача напряжения от выбранного внешнего источника (источник выбирается левым переключателем) во внутреннюю сеть Комплекса. При наличии напряжения загорится зеленый световой индикатор «Основной ввод»;

- ВЫКЛ, либо «О» – при установке переключателя в данное положение внутренняя сеть Комплекса будет обесточена от всех источников;

- Аварийный ввод - при установке переключателя в данное положение происходит подача напряжения от преобразователя напряжения 24(12)DC/220AC В (при выборе данного источника питания левый переключатель необходимо установить в положение «Выкл.»). При наличии напряжения загорится красный световой индикатор «Аварийный ввод».

Электрощит имеет маркировку по ГОСТ Р МЭК 60601-1 знак «Осторожно! Высокое напряжение!» (Рисунок 6).

И) При невозможности подключения к внешней сети 220/380 В и запуска автономного электрогенератора в качестве источника питания Комплекса используется преобразователь напряжения 24(12)DC/220AC В (Рисунок 7), работающий от основного или дополнительного аккумулятора. Преобразователь напряжения постоянно включен в питающую сеть Комплекса.

ВНИМАНИЕ! Не допускается подключение к преобразователю напряжения электрооборудования суммарной мощностью, превышающий его номинал.

К) Температурный режим в отсеках Комплекса обеспечивается следующими видами оборудования:

- электрические нагреватели (конверторы), установленные в каждом рабочем отсеке (Рисунок 8);
- система кондиционирования, установленная в каждом рабочем кабинете (Рисунок 9);
- тепловая завеса, установленная над входной дверью в Комплекс (Рисунок 10, 10.1);
- вентиляционная фильтрующая установка с электрическим калорифером (Рисунок 11, 11.1);
- автономный воздушный отопитель, с возможностью работы во время движения (Рисунок 12, 12.1).

Л) Вентиляция в Комплексе осуществляется при помощи:

- естественной вентиляции через окна (Рисунок 13);
- принудительной приточной вентиляции, с помощью вентиляционной фильтрующей установки (Рисунок 11, 11.1);
- принудительной вытяжной вентиляции, с помощью канальных и бытовых вентиляторов (Рисунок 14, 14.1, 14.2).



Рисунок 8. Электрические нагреватели.

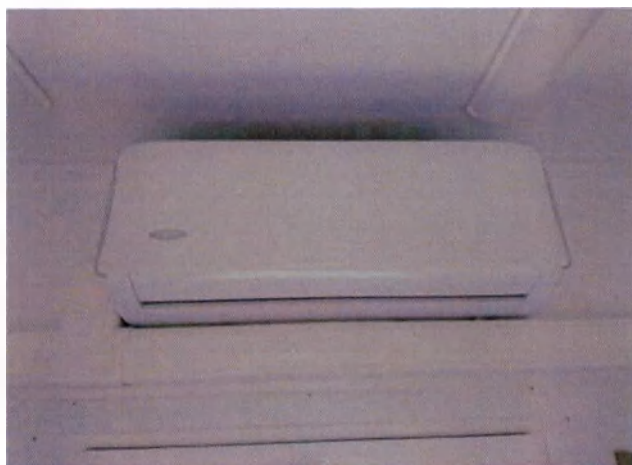


Рисунок 9. Система кондиционирования
(внутренний блок).



Рисунок 10. Тепловая завеса.



Рисунок 10.1. Пульт управления тепловой завесой.



Рисунок 11. Вентиляционная установка. Рисунок 11.1. Пульт управления вентиляционной фильтрующей установкой.



Рисунок 12. Автономный воздушный отопитель.



Рисунок 12.1. Пульт управления автономным воздушным отопителем.



Рисунок 13. Окно.



Рисунок 14. Включатель принудительной вытяжной вентиляции.



Рисунок 14.1. Вентилятор канальный.

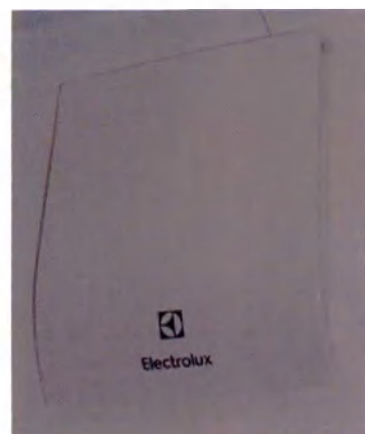


Рисунок 14.2. Вентилятор бытовой.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1.1 Требования безопасности

- К работе с Комплексом допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством по эксплуатации.

- На случай предотвращения возникновения пожара в салоне Комплекса установлена пожарная сигнализация. Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный может находиться в кабине водителя (Рисунок 15) или в кузове фургона около вводно-распределяющего устройства (ВРУ). В каждом кабинете и отсеках Комплекса (кроме климатического) расположены извещатели пожарные дымовые (Рисунок 15.1). В кабине водителя (кроме исполнения 972200) и коридоре Комплекса расположены охранно-пожарные свето-звуковые оповещатели (Рисунок 15.1).



Рисунок 15. Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный.

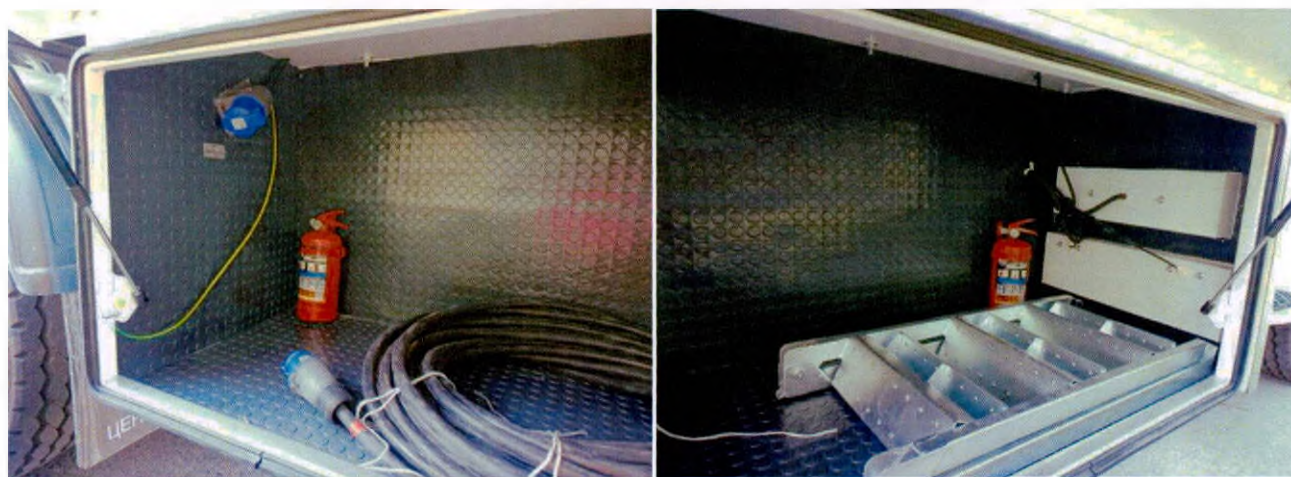


Рисунок 15.1. Извещатель пожарный дымовой и оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой.

Комплекс оснащается огнетушителями порошковыми (ОП-2(з)-ABCE-01). (Рисунки 16, 16.1).



Рисунок 16. Огнетушители (внутри Комплекса).



Рисунки 16.1. Огнетушители (в «подфургонном» боксе).

- Запрещается использование устройств с электромагнитным излучением в Комплексе, во избежание помех при работе медицинского оборудования.
- Запрещается пользоваться открытым огнем и курить в помещении Комплекса.

- Запрещается использовать соединительные провода и кабель для подключения к внешней сети 220/380 В с поврежденной изоляцией.

- Запрещается при подключенном питании к внешней сети 220/380 В, при работающем автономном электрогенераторе 220/380 В, при включённом преобразователе напряжения 24/220 (380)В, 12/220 (380) В:

- открывать силовой щит;
- производить разборку вилок, розеток и прочего электрооборудования.

- Запрещается пользоваться измерительными приборами, работающими от сети 220/380 В, на открытом воздухе.

- Запрещается пользоваться трапом без перил и крайних опор.

ВНИМАНИЕ! Суммарная мощность нагрузки, подключаемая к розеткам Комплекса не должна превышать 10/18 кВт при работе от сети 220/380 В и электрогенератора. При работе от преобразователя напряжения 24(12)DC/220AC В суммарная мощность нагрузки не должна превышать его номинальную мощность.

Используйте соединительные провода и кабели, только идущие в комплекте с Комплексом. Производитель не несет ответственности за Комплекс, в случае использования не оригинальных частей.

2.1.2 Выбор места и стоянка Комплекса

Перед выездом проверьте техническое состояние Комплекса:

1. Подходя к месту стоянки, обратите внимание, нет ли под Комплексом следов утечки масла или эксплуатационных жидкостей. По возможности устраните течь до выезда.

2. Обязательно проверьте давление воздуха в шинах и общее состояние шин. При необходимости доведите давление до рекомендованного для данного типа шин. Разница значений давления в пределах 0,2–0,3 кгс/см² может ухудшить параметры управляемости, плавность хода транспортного средства и привести к нежелательному заносу или сносу при торможении. Из-за пониженного давления в шинах быстрее изнашивается протектор и расходуется больше топлива. По истечении одного месяца эксплуатации автомобиля необходимо:

- а) Протянуть болты крепления надстройки к шасси с моментом затяжки 46...60 Н.м.
- б) Ежемесячно проводить смазку петель и замков дверей.
- в) Ежемесячно наносить силиконовую смазку на дверные уплотнители

3. Обойдите вокруг Комплекса, проверьте следующее:

- комплектность съемных деталей (щетki стеклоочистителя, наружные зеркала и др.);
- целостность стекол Комплекса, рассеивателей фар и фонарей. Не откладывайте замену разбитых рассеивателей. Треснувшие стекла Комплекса заменяйте при первой возможности;
- состояние замков и крепления трапов;
- наличие и состояние номерных знаков. Фары, подфарники, задние фонари и номерные знаки должны быть чистыми.

Перед дальней поездкой и после длительного перерыва в эксплуатации проверьте состояние запасного колеса, укомплектуйте Комплекс инструментами и принадлежностями.

В случае обнаружения неисправности примите решение (с учетом требований Правил дорожного движения) о начале поездки или ремонте Комплекса.

Запрещается начинать движение Комплекса, не убедившись в надежности креплений медицинского оборудования, мебели, дверей и, по необходимости, других элементов Комплекса.

Для приведения Комплекса в рабочее состояние:

- Установить Комплекс на ровном участке дороги или на площадке с асфальтобетонным или цементобетонным покрытием, без видимого уклона с сухой ровной поверхностью длиной не менее 12 метров, шириной не менее 6 метров.
- Стоянку Комплекса необходимо осуществить вблизи (до 20 метров) точки подключения внешней питающей цепи (разрешается пренебречь при запланированной работе автономного аварийного генератора).
- Установить противооткатные упоры под колеса Комплекса, расположенные в «подфургонном» боксе; за исключением транспортного средства 185514 (Рисунок 17), или на раме ТС (Рисунок 17.1).



Рисунок 17. Противооткатные упоры.



Рисунок 17.1. Противооткатные упоры.

Для транспортного средства 185514:

- затянуть стояночный тормоз автомобиля, при наличии установить противооткатные упоры под колеса Комплекса.

Для транспортного средства 185514, 385527:

- установить опоры кузова, расположены снизу в задней части Комплекса (Рисунок 18).

Опоры устанавливаются путем кручения гайки специальным ключом, расположенным в генераторном отсеке, до опускания пятки опоры на землю (Рисунок 18.1).



Рисунки 18, 18.1. Установка опор кузова специальным ключом.

- Открыть заднюю дверь Комплекса и снять фиксирующие стяжки подножки-трапа. После этого плотно приставить подножку-трап к задней двери комплекса (Рисунок 19).



Рисунки 19. Установка подножки

2.1.3 Сборка трапа

Существует два варианта разновидности трапов, с прямым и боковым лестничным маршем:

Вариант 1. С прямым лестничным маршем.

- Открыть крышку технологического отсека входного трапа (ключ №1), расположенного под входной дверью в Комплекс (Рисунок 20, 20.1).

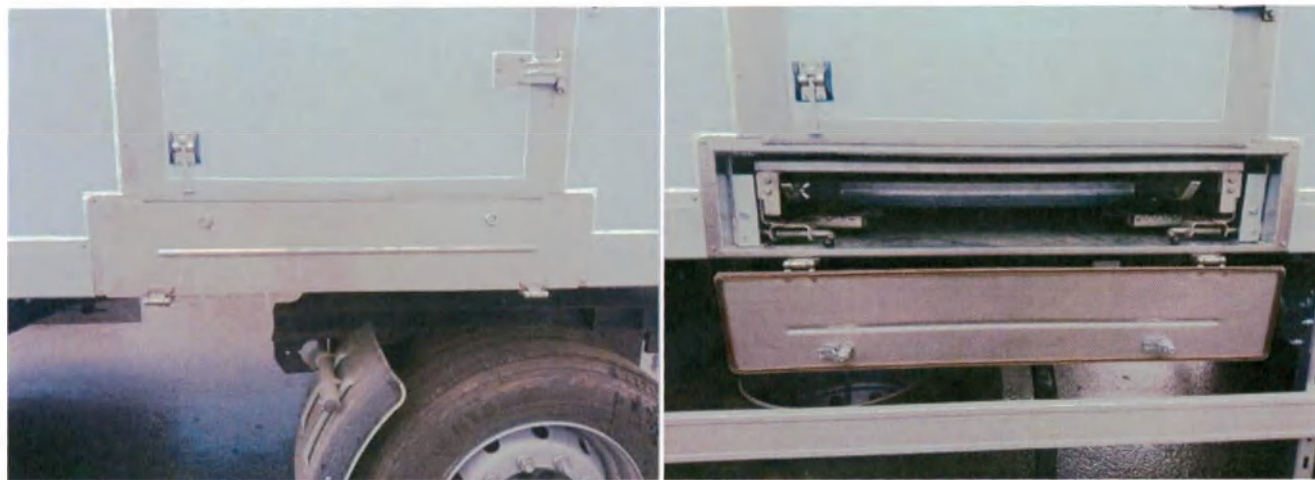


Рисунок 20, 20.1. Технологический отсек входного трапа. Вариант 1.

- Потянуть за ручки фиксаторов площадки, оставить их в открытом положении (Рисунок 21, 21.1).

- Выдвинуть площадку на себя до упора, включить дальние фиксаторы в положение закрыто, тем самым зафиксировав её (Рисунок 22, 22.1).



Рисунок 21, 21.1. Передние фиксаторы площадки входного трапа, в открытом положении.



Рисунок 22. Площадка входного трапа в выдвинутом положении.

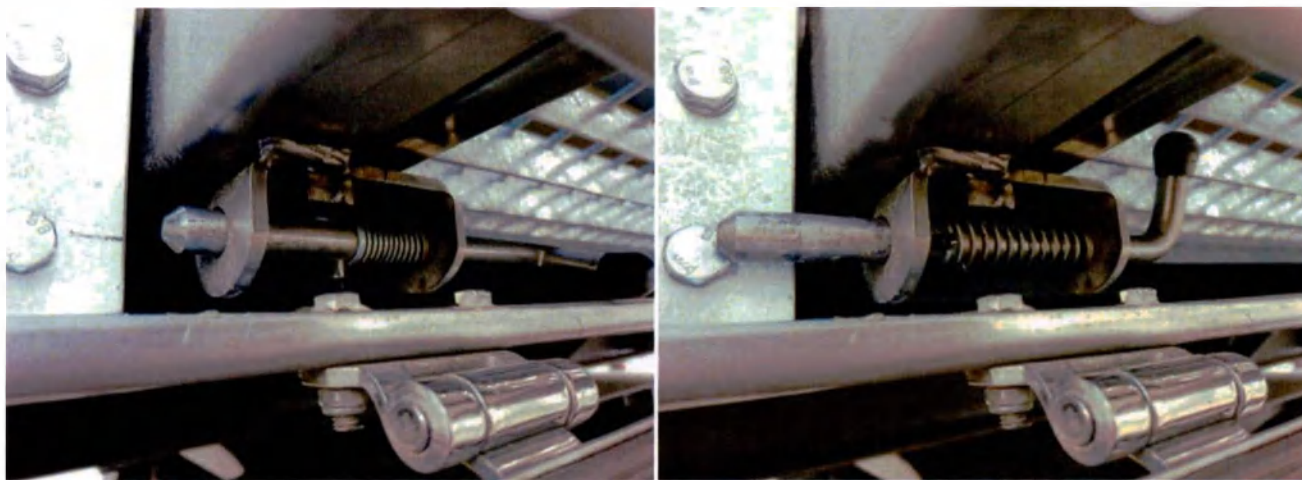


Рисунок 22.1. Задний левый фиксатор площадки входного трапа (открыто, закрыто).

- Вывернуть фиксирующий винт лестничного марша (Рисунок 23), выдвинуть марш на себя до упора, включить фиксаторы в положение закрыто (Рисунки 24, 25). При наличии, с помощью регулировочной пятки регулировать высоту лестницы.

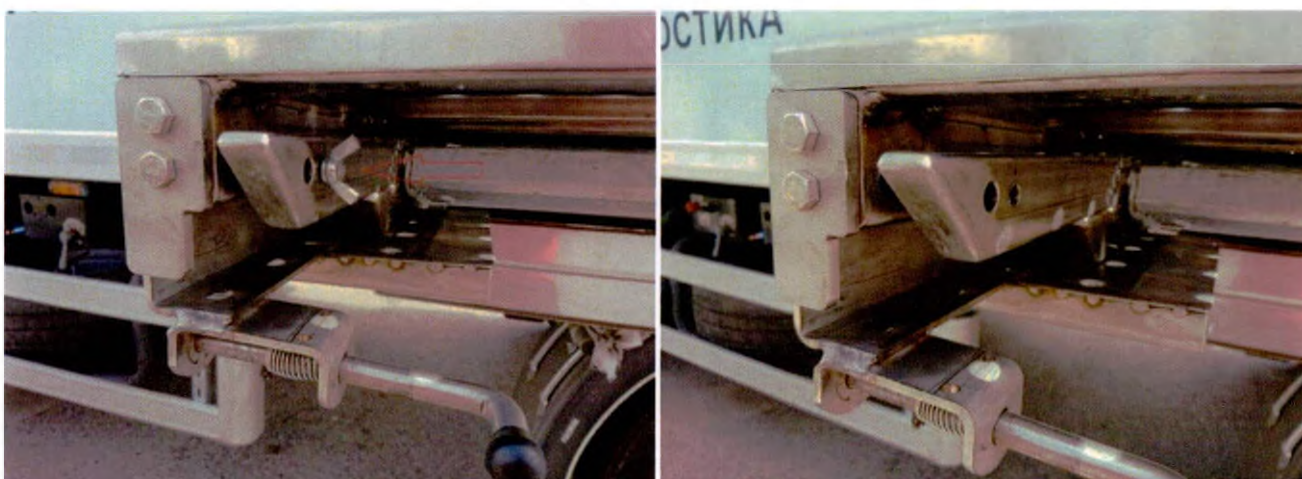


Рисунок 23. Фиксирующий винт лестничного марша.



Рисунок 24. Лестничный марш в выдвинутом положении.

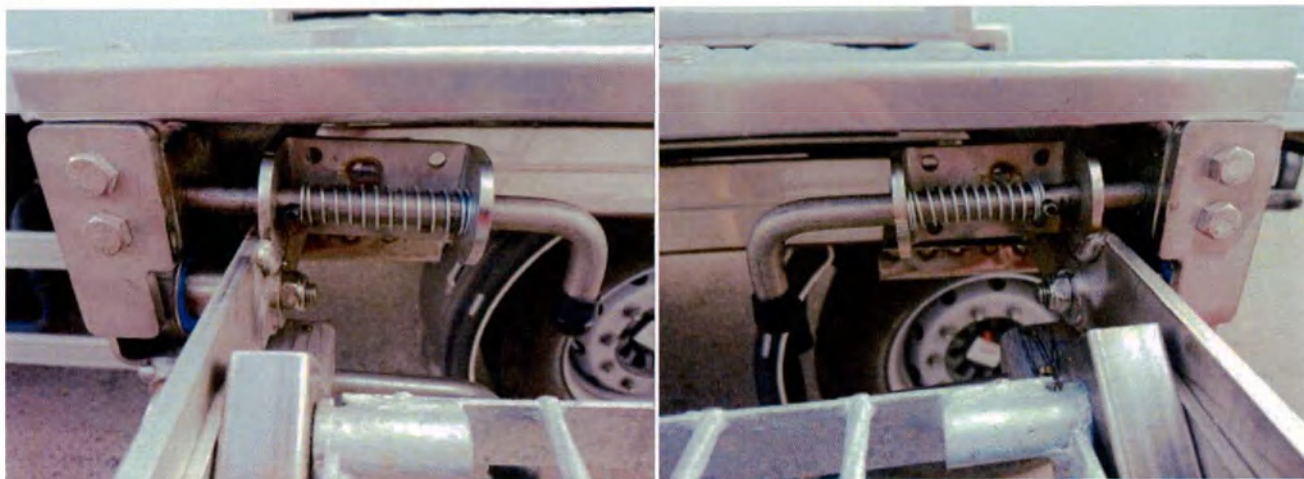


Рисунок 25. Фиксаторы лестничного марша в закрытом положении.

- Установить перила площадки, закрепить винтами и включить боковые фиксаторы (Рисунок 26, 26.1). Установить стойки перил лестничного марша, установить перила (Рисунок 27, 27.1).



Рисунок 26. Перила площадки.

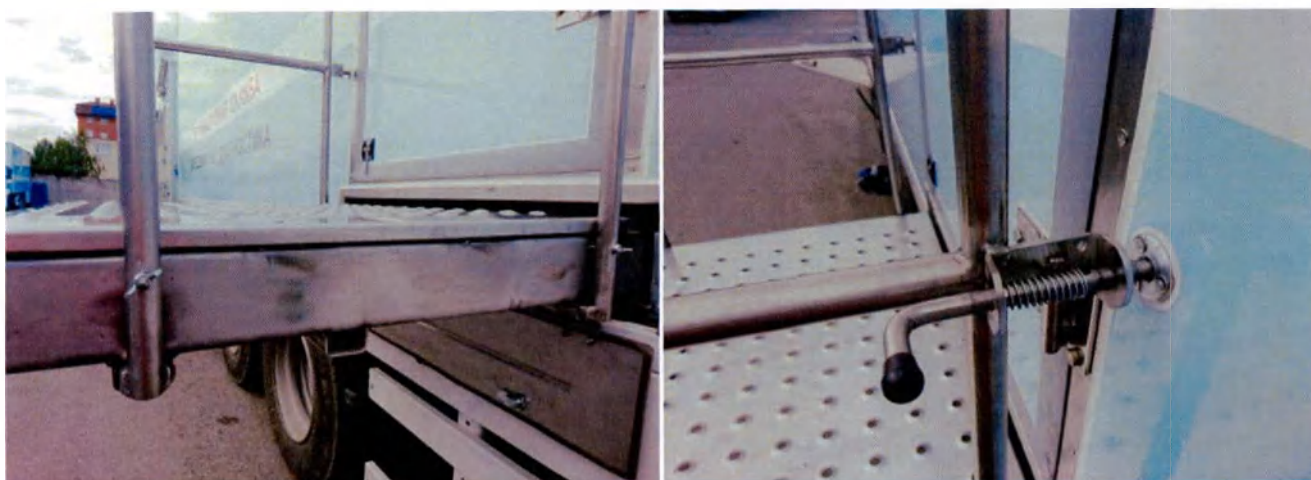


Рисунок 26.1. Винты и фиксаторы перил площадки.



Рисунок 27. Стойки перил лестничного марша.



Рисунок 27.1. Перила лестничного марша.

- Разборка трапа осуществляется в обратном порядке.
- Перила трапа хранятся в «подфургонных» боксах (Рисунок 28).

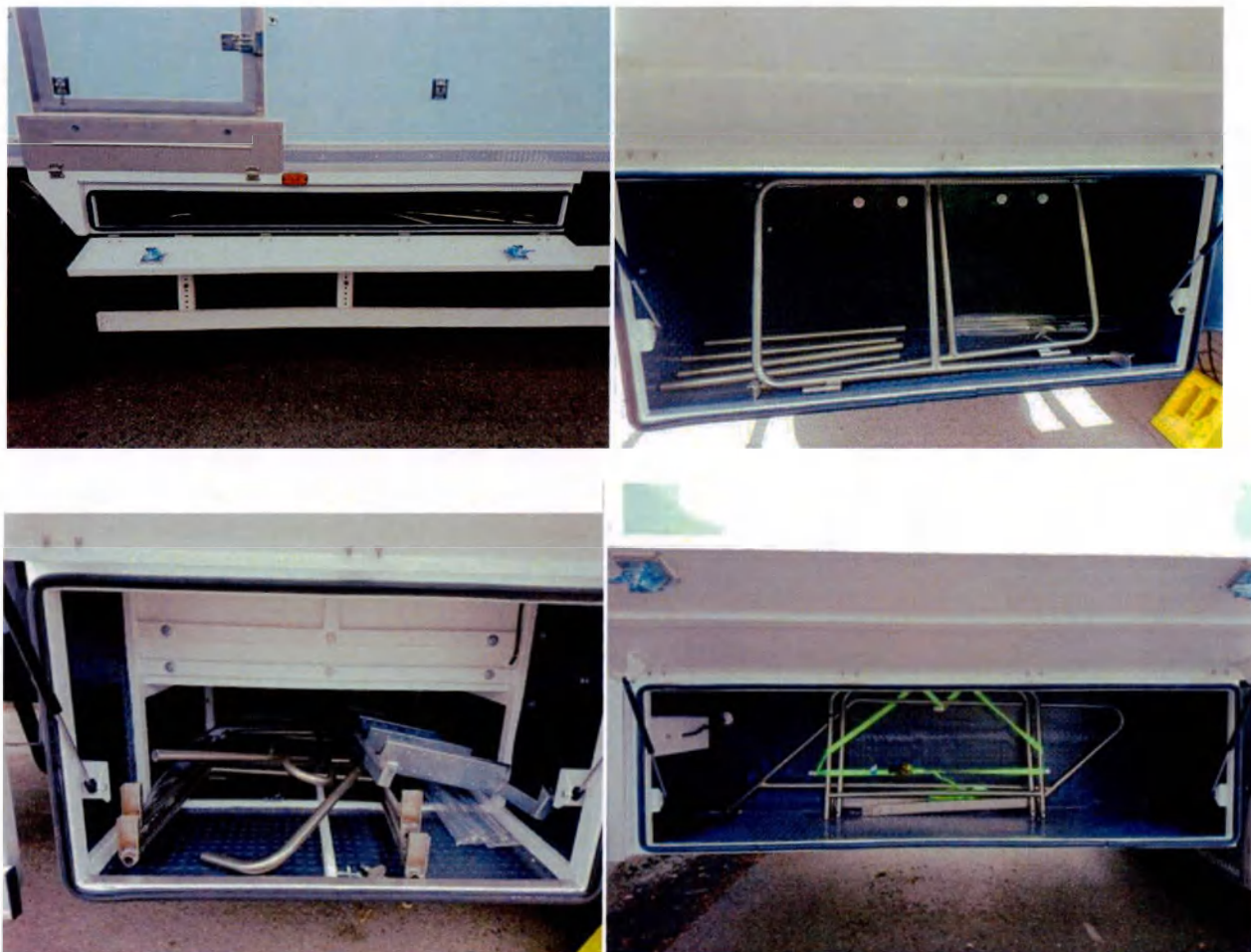


Рисунок 28. Варианты хранения перил.

Вариант 2. С боковым лестничным маршем.

- Открыть крышку технологического отсека входного трапа (ключ №1), расположенного под входной дверью в Комплекс (Рисунок 29).
- Потянуть за ручку фиксатора площадки, оставить его в открытом положении (Рисунок 30).
- Выдвинуть площадку на себя до упора, включить дальний фиксатор в положение закрыто (Рисунок 31, 32).
- Достать из заднего «подфургонного» бокса, лестничный марш, установить его к площадке, закрепить пружинными фиксаторами (Рисунок 33, 34, 34.1).
- Опустить опорные стойки площадки, закрепить их с помощью штифтов и пружинных фиксаторов, отрегулировать высоту (Рисунок 35, 36).



Рисунок 29. Тех.отсек входного трапа. Вариант 2.



Рисунок 30. Фиксатор трапа.



Рисунок 31. Площадка входного трапа.



Рисунок 32. Фиксатор площадки.

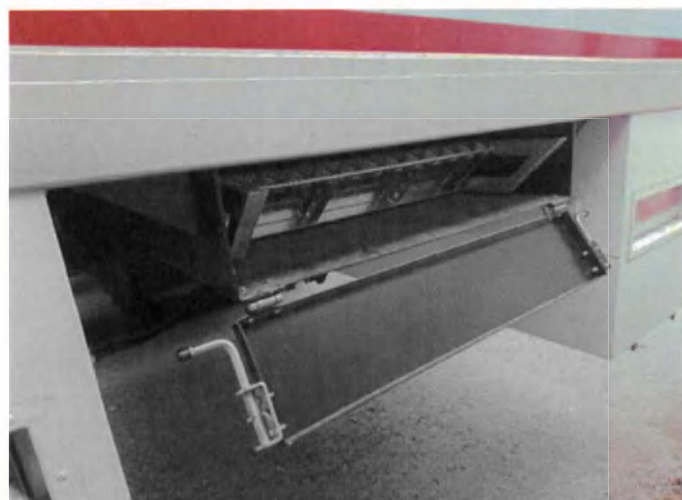


Рисунок 33. Задний «подфургонный» бокс.



Рисунок 34. Установленный лестничный марш.



Рисунок 34.1. Пружинные фиксаторы.



Рисунок 35. Опорные стойки площадки.



Рисунок 36. Фиксаторы опорных стоек.

- Установить стойки перил и закрепить пружинными фиксаторами (Рисунки 37- 40).



Рисунок 37. Стойки перил.



Рисунок 38. Стойки перил.



Рисунок 39. Пружинные фиксаторы стоек перил.



Рисунок 40. Пружинные фиксаторы стоек перил.

- Установить перила, закрепить их к стойкам с помощью штифтов и пружинных фиксаторов (Рисунки 41, 42).




Рисунки 41. Входной трап. Вариант 2.



Рисунки 42. Штифты и фиксаторы перил.

- Зафиксировать перила между собой при помощи болта с гайкой (Рисунок 43).

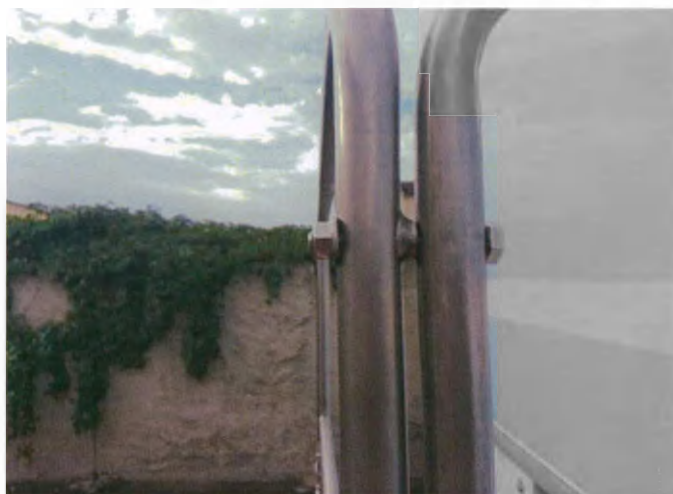

Рисунки 43. Фиксация перил между собой.

- Разборка трапа осуществляется в обратном порядке.

Все крепежные и фиксирующие элементы на трапе должны быть затянуты.

Особое внимание необходимо уделить местам крепления трапа к Комплексу и контролировать качество соединения в процессе использования.

1. Защитный тент (козырёк).

Опционально может устанавливаться защитный тент (козырёк)

- Для защиты от осадков и прямых солнечных лучей, при необходимости разворачивается защитный тент (Рисунок 44).



Рисунок 44. Защитный тент (козырёк).

Использовать тент только во время стоянки Комплекса. Запрещается оставлять тент раскрытым без присмотра или на ночь. При сильном ветре (более 30 км/ч) и во время сильного дождя рекомендуется немедленно складывать тент. Эксплуатация тента в зимних условиях при сильном снегопаде может привести к его повреждению. При закрытии и раскрытии тента не трогайте подвижные части. Не допускайте дополнительной нагрузки на рычаги тента. В системах с ручным приводом при закрытии нельзя применять силу.

Складывайте тент по возможности в сухом и чистом состоянии (без листвы и прочего мусора). Мокрые и грязные тенты стоит при первой же возможности раскрыть для просушки. Пренебрежение этой мерой может привести к складкам ткани и другим видимым повреждениям покрытия, не предусмотренным гарантией. Ткань тента при незначительном загрязнении моется слабым мыльным раствором мягкой щеткой, и тщательно промывается чистой водой.

- С помощью рукоятки (Рисунок 45) разверните защитный тент. Вставьте рукоятку в приёмную муфту передающего кардана (Рисунок 46).

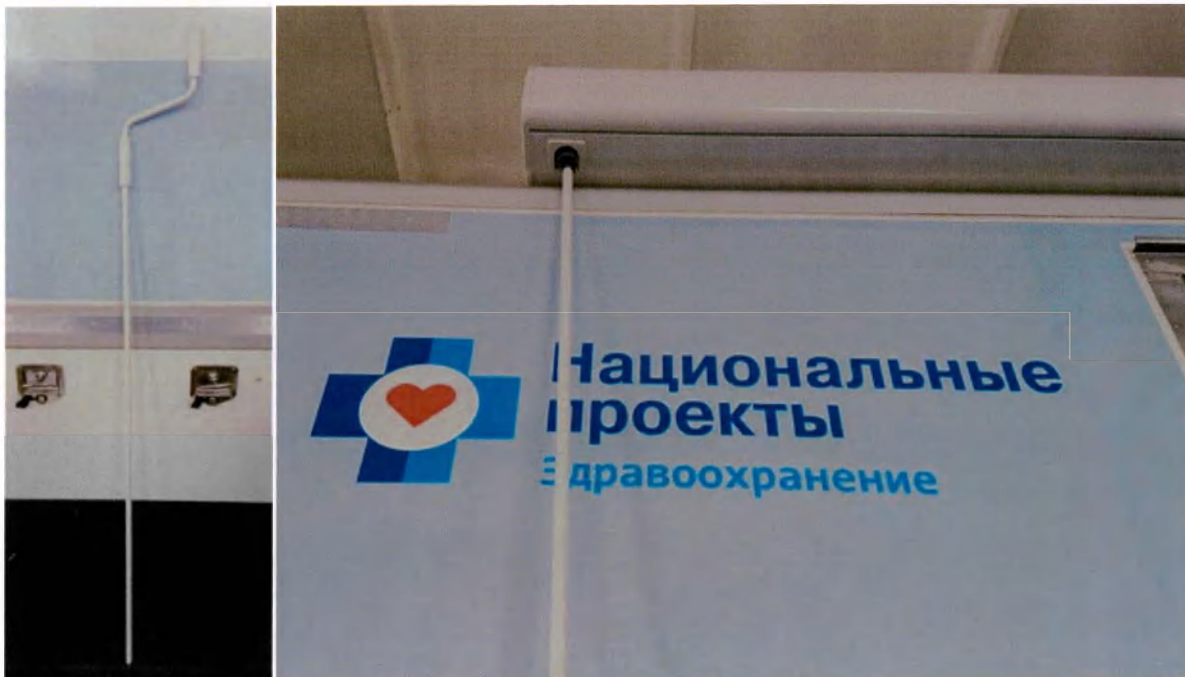


Рисунок 45. Рукоятка защитного тента.

Открытие тента осуществляется с помощью вращения рукоятки почасовой стрелки (рисунок 47, 47.1). Или с помощью пульта дистанционного управления, при наличии электропривода.

- Закрытие тента осуществляется в обратном порядке.



Рисунок 46. Приёмная муфта передающего кардана



Рисунок 47. Открытие тента.



Рисунок 47.1. Открытый тент.

2.1.4 Подключение к электропитанию

А) Подключение к внешней электросети

Для подключения к внешней электросети, Комплекс оснащен силовым кабелем с заземлением марки КГнг длиной не менее 15м с промышленными разъемами на концах. При транспортировке кабель в сложенном виде находится в «подфургонном» боксе (Рисунок 48).

Осторожно! Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно присоединяться только к сетевому питанию, имеющему защитное заземление!



Рисунок 48. Кабель силовой с заземлением.

- Подключить кабель питания к разъёму «ВВОД «ГОРОД»». Разъём расположен в «подфургонном» боксе или на борту Комплекса (Рисунок 49).

- один конец Т- образного штыря заземления установить в земле, другой соединить с ПМК посредством кабеля.



Рисунок 49. Вилка «ВВОД 220В».

- Подключить другой конец кабеля питания к предварительно обесточенному источнику внешнего питания.

ВНИМАНИЕ! К источнику внешнего электропитания кабель следует подключать через автоматический выключатель или плавкие вставки (предохранители). Автоматический выключатель должен содержать тепловой или электромагнитный расцепитель (механическое коммутационное устройство).

- Проверить правильность и надежность подключения кабеля.
- Включить напряжение на кабель со стороны внешнего источника питания.
- Повернуть левый переключатель в положение «ГОРОД» на силовом электрошите, расположенном в хозяйственном отсеке. При правильном подключении должен загореться

индикатор зеленого цвета (Рисунок 50).

- Правый переключатель повернуть в положение «Основной ввод». При правильном подключении должен загореться индикатор зеленого цвета (Рисунок 50).



Рисунок 50. Пусковые переключатели и сигнальные лампы.

Выключение питания от внешней сети производится путем поворота сначала правого выключателя в среднее положение («О»), далее левый выключатель в среднее положение («О»). Индикаторные лампы должны потухнуть. Далее в обратном порядке подключения.

Б) Подключение к автономному электрогенератору.

ВНИМАНИЕ! Запрещается закрывать дверь генераторного отсека при работающем электрогенераторе. Отработавшие газы токсичны!

Запрещается запускать генератор при выключенном вентиляторе дополнительного охлаждения и закрытыми защитными жалюзи! (Рисунок 5, 5.1)

Запускать генератор в гараже или другом замкнутом помещении ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Для подключения Комплекса к автономному электрогенератору необходимо:

- Открыть дверь генераторного отсека, расположенного с внешней стороны Комплекса.
- Установить технический трап (Рисунок 51), расположенный в «подфургонном» боксе (для удобства обслуживания генераторного отсека).
- Подключить вилку питания к выходной розетке электрогенератора (Рисунок 52).
- Завести электрогенератор (см. руководство по эксплуатации генератора, входящий в комплект документации при поставке). Включить дополнительный вентилятор охлаждения, который располагается с боку или под электрогенератором (Рисунок 5).



Рисунок 51. Технический трап.



Рисунок 52. Вилка питания от генератора.

- Повернуть левый переключатель в положение «Генератор» на силовом электрощите. При правильном подключении должен загореться индикатор зеленого цвета.

- Правый переключатель повернуть в положение «Основной ввод». При правильном подключении должен загореться индикатор зеленого цвета.

Выключение питания от генератора производится путем поворота сначала правого переключателя в среднее положение, далее левый переключатель в среднее положение. Индикаторные лампы должны потухнуть. Далее в обратном порядке подключения.

В) При невозможности подключения к внешней сети 220/380 В и запуска автономного генератора в качестве источника питания Комплекса используется преобразователь напряжения 24(12)DC/220AC (Рисунок 53), работающий от аккумуляторов шасси или дополнительных АКБ.

Для правильного включения преобразователя необходимо выполнить в строгом порядке следующие действия:

- Убедиться включен ли в электрощите красный рубильник автомат 24V.
- Включить клавишу 12/24В, находящуюся справа сзади преобразователя.
- Включить автомат 220В, находящийся слева сзади преобразователя.
- Преобразователь включится, через несколько секунд включатся 3 индикатора.
- В электрощите установить автомат «ОТ МАР» в верхнее положение ВКЛ и реле в положение «Аварийный ввод».

При правильном включении преобразователь не должен издавать звуковые сигналы, за исключением нескольких в первые несколько секунд. (Для дополнительной информации

необходимо руководствоваться инструкцией на преобразователь, находящейся в комплекте документации.)

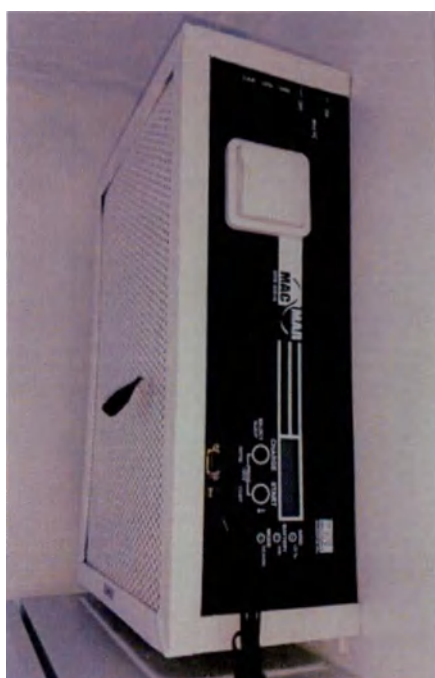


Рисунок 53. Преобразователь напряжения 24/220В (МАП).

- На электрощите повернуть левый переключатель в среднее положение, правый переключатель в положение «Аварийная сеть».

- На электрощите должна гореть только лампа красного цвета.

Г) Подключение через преобразователь напряжения 12/220В к бортовой сети.

Для подключения Комплекса через преобразователь напряжения 12/220В необходимо:

- В электрощите установить автомат «ОТ МАП» в верхнее положение ВКЛ и реле в положение «Аварийный ввод».

- В случае если преобразователь напряжения выключен, необходимо его включить.

- При включении загорится индикация на экране преобразователя и раздастся звуковой сигнал.

- При правильном подключении индикатор реле контроля входного напряжения не загорается.

- Для работы сети необходимо в электрощите включить соответствующие автоматы в верхнее положение ВКЛ. От преобразователя питание подается только на медицинские розетки красного цвета, вентиляцию, освещение и автономный воздушный отопитель.

- Проверить работоспособность сети можно путем включения основного освещения и/или облучателя-рециркулятора.

При питании от генератора или внешней сети, включенный преобразователь заряжает аккумуляторы шасси.

ВНИМАНИЕ! Не допускается подключение к преобразователю напряжения электрооборудования суммарной мощностью, превышающей его номинальную мощность.

Выключение питания от преобразователя производится путем поворота сначала правого переключателя в среднее положение, левый переключателя остается в среднем положении. Индикаторные лампы должны потухнуть. Далее в обратном порядке подключения.

2.1.5 Освещение

В Комплексе установлено искусственное освещение двух видов: общее и вспомогательное (аварийное) (Рисунок 54, 55).

ВНИМАНИЕ! Запрещается закрывать дверь генераторного отсека при работающем электрогенераторе. Отрабатывшие газы токсичны!

Запрещается запускать генератор при выключенном вентиляторе дополнительного охлаждения и закрытыми защитными жалюзи! (Рисунок 5, 5.1)

Запускать генератор в гараже или другом замкнутом помещении **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**



Рисунок 54. Искусственное освещение.



Рисунок 55. Аварийное освещение.

Общее освещение обеспечивается светильниками, установленными на потолке в каждом отсеке. Общее освещение работает от сети 220 В.

Общее освещение включается в каждом отсеке выключателем, находящимся рядом с дверным проемом (Рисунок 56).



Рисунок 56. Выключатели общего и вспомогательного (аварийного) освещения.

Вспомогательное освещение - обеспечивается светильниками меньшей мощности, установленными в каждом отсеке. Вспомогательное освещение работает от бортовой сети транспортного средства.

Вспомогательное (аварийное) освещение включается выключателем в коридоре Комплекса.

2.1.6 Система внутреннего отопления – охлаждения помещений

Система Комплекса состоит из:

- электрических нагревателей (конверторы) (Рисунок 8), установленных в каждом рабочем отсеке;

- системы кондиционирования (сплит-система): наружный блок, расположенный в отдельном климатическом отсеке Комплекса или вне Комплекса, внутренние блоки, расположенные в каждом рабочем кабинете с индивидуальным пультом управления (Рисунок 57). Система работает на обогрев и охлаждение помещений при температуре окружающей среды не ниже минус 5°C.



Рисунок 57. Внутренний и наружный блоки кондиционера.

- тепловой завесы, установлена в коридоре над входной дверью Комплекса, для создания теплового барьера во время работы Комплекса в зимнее время года (Рисунок 58);

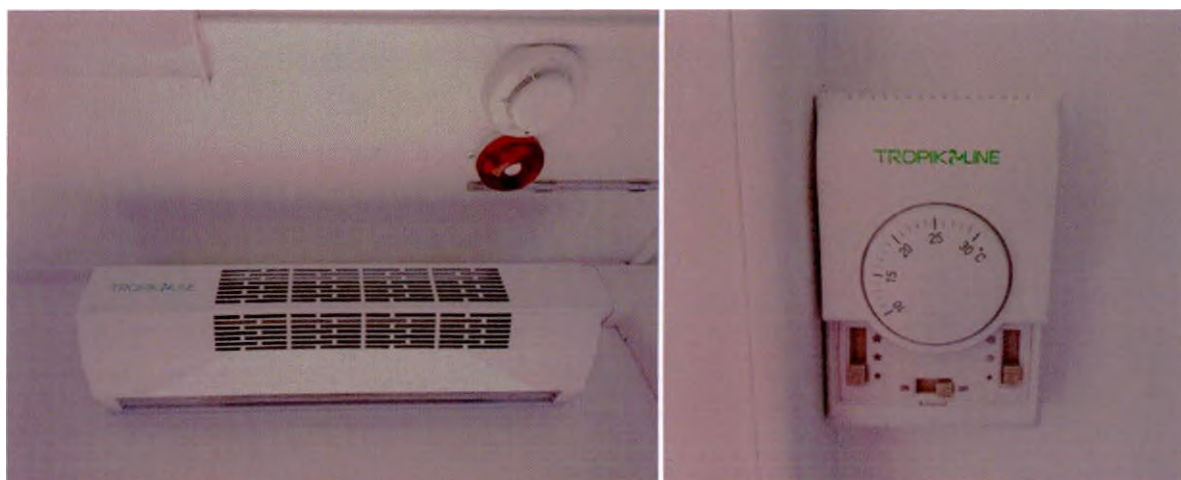


Рисунок 58. Тепловая завеса и пульт управления.

- автономный воздушный отопитель, с возможностью работы во время движения от топливного бака автомобиля или собственного бака (Рисунок 59).



Рисунок 59. Автономный воздушный отопитель и пульт управления.

(смотри инструкцию эксплуатации, входящую в комплект документации при поставке).

Внимание! Требуется периодическая промывка фильтров внутренних блоков под струей воды! (см. раздел регламентные работы).

Внимание: запрещается использование одновременно всех систем отопления - охлаждения!

Допускается использование одновременно - воздушной завесы и батарей (конвекторов) и автономного воздушного отопителя, либо только системы кондиционирования!

Автономный воздушный отопитель.

Комплекс оснащен автономным воздушным отопителем, который позволяет быстро обогреть Комплекс как во время движения, так и во время стоянки.

Для включения автономного воздушного отопителя необходимо включить отопитель (смотри инструкцию по эксплуатации воздушного отопителя, входящую в комплект документации при поставке), поворотным или кнопочным выключателем (Рисунок 59).

Запрещается:

- Выключать напряжение питания воздушного отопителя, пока не завершится цикл отключения устройства;
- Ставить на поверхность блока воздушного отопителя какие-либо предметы;
- Загораживать воздухозаборное отверстие воздушного отопителя;
- Загораживать отверстие подачи воздуха в коридоре;
- Пользоваться воздушным отопителем при появлении запахов продуктов горения дизельного топлива внутри Комплекса.

Система кондиционирования.

Каждый кабинет Комплекса оснащен внутренним блоком кондиционера.

Включение системы кондиционирования:

- Открыть люк климатического отсека, расположенного над генераторным отсеком

(Рисунок 57);

- Включить индивидуальные блоки в кабинетах (смотри инструкцию по эксплуатации кондиционера, входящую в комплект документации при поставке).

Запрещается: Использовать кондиционер с закрытым люком климатического отсека.

Система водоснабжения.

Система водоснабжения (Рисунок 60) представляет собой канистру под чистую воду объемом 10 л, канистру под использованную воду объемом 15 л, насоса подачи и подогрева воды (располагается в канистре с чистой водой).

ВНИМАНИЕ! Подогреватель воды перед включением должен быть погружен в воду!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать подогреватель воды при отсутствии воды!



Рисунки 60. Система водоснабжения.

Для использования системы водоснабжения необходимо в канистру для чистой воды налить воду, опустить в нее насос-нагреватель, сливной шланг мойки установить в канистру под использованную воду. Включить питание насоса-нагревателя путем установки вилки белого цвета в бытовую розетку. Для подачи воды необходимо повернуть кран. Регулировка температуры нагрева происходит с помощью вращения выключателя-регулятора на насосе-нагревателе (смотри инструкцию по эксплуатации насоса-нагревателя, входящую в комплект

документации при поставке).

ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрева нагревателя и насоса не допускается использовать систему водоснабжения без воды, требуется периодически осматривать канистру на наличие воды!

2.1.7 Медицинское и другое оборудование Комплекса.

Для электрического подключения оборудования в Комплексе предусмотрено два вида электрических розеток, красного цвета для медицинского оборудования и белого цвета для бытовых нужд (Рисунок 60).

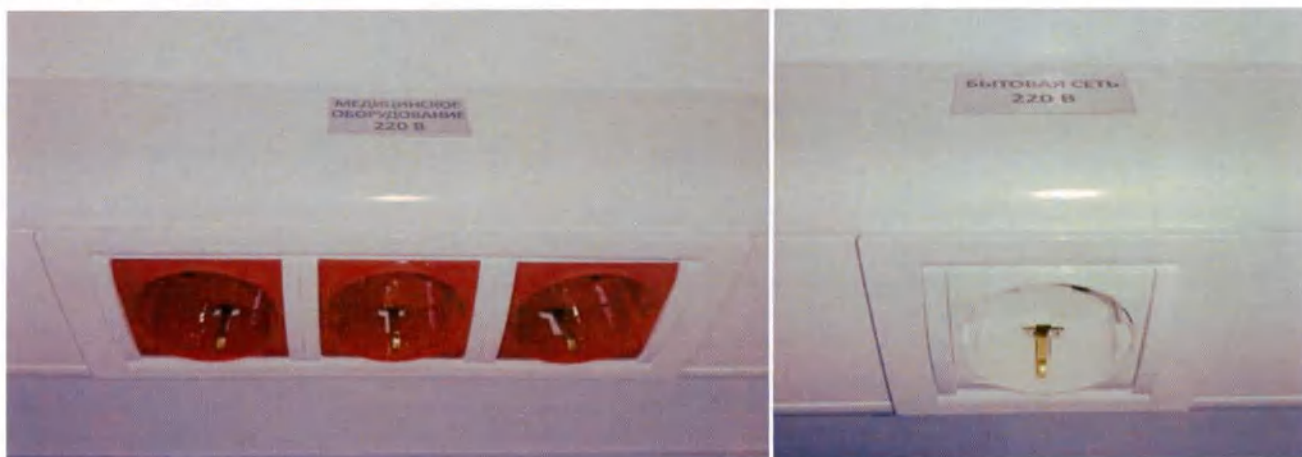



Рисунок 60. Электрические розетки.

2.1.7.1 Транспортное и рабочее положение оборудования и мебели.

Оборудование и мебель при движении перевозится в транспортном положении. Перед началом медицинского приема, Комплекс необходимо перевести в рабочее положение, освободив мебель и оборудование от креплений, транспортных упаковочных сумок и ящиков, убрав транспортировочную тару в служебное помещение. Расставить медицинское оборудование и мебель в соответствии с рабочими кабинетами и рабочими местами приема медицинского персонала.

2.1.7.2 Крепление мебели при транспортном положении:

- стулья крепятся к стене при помощи транспортных кронштейнов (Рисунок 61);

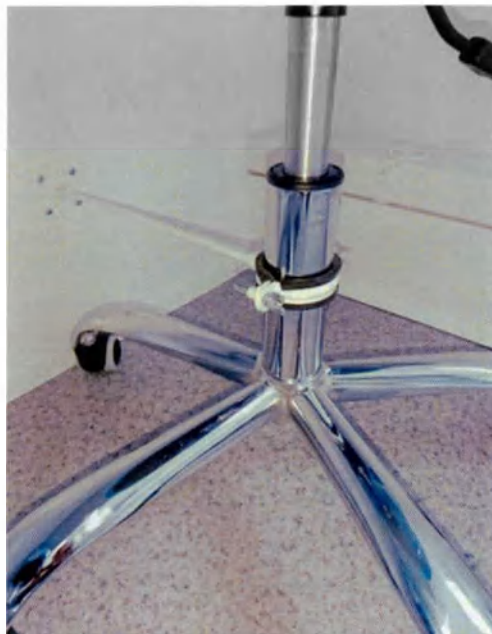


Рисунки 61. Крепление мебели.

- при приведении Комплекса в рабочее положение, выкрутить крепление (в стене останется только ответная часть (Рисунок 62)), уложить кронштейны в ящик для временного хранения в хозяйственный отсек.



Рисунок 62. Транспортные кронштейны.

- двери Комплекса в транспортном состоянии фиксируются в закрытом положении и закрываются на замок с помощью ключей. В рабочем состоянии могут быть открыты и удерживаться дверными фиксаторами (Рисунок 63).

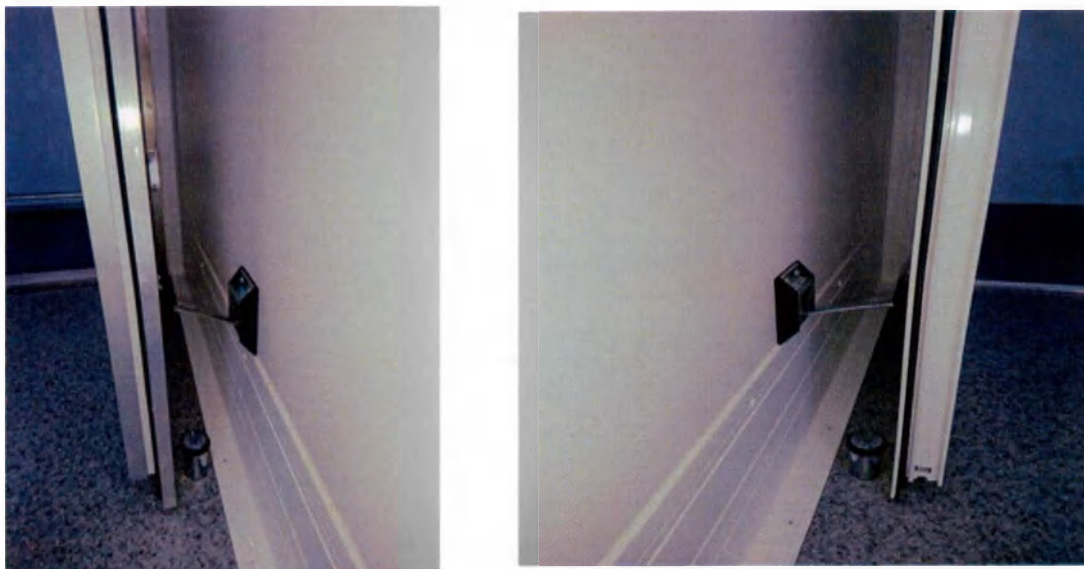

Рисунки 63. Дверные фиксаторы.

- сдвижные двери Комплекса в транспортном состоянии фиксируются в закрытом положении, закрываются на замок, закрывается нижний шпингалет и фиксируются двумя резьбовыми фиксаторами (Рисунок 64).

-при наличии, зафиксировать дверь с помощью винта-барашка.



Рисунок 64. Фиксация сдвижных дверей в транспортном положении.

2.1.7.3 Пример транспортного расположения и крепления медицинского оборудования:

- Гинекологическое кресло неподвижно закреплено к полу. Дополнительно кресло имеет транспортный крепежный элемент **красного цвета**, расположенный под подъемным механизмом кресла, для приведения кресла в рабочее состояние необходимо отвернуть два винта-барашка транспортного крепежного элемента (Рисунок 65).



Рисунок 65. Гинекологическое кресло и транспортный кронштейн.

Внимание! Во избежание поломки подъемного механизма гинекологического кресла не допускается транспортировка без фиксации транспортного кронштейна.

- УЗИ аппарат ставится на полу в специальном кейсе и крепится специальными резиновыми стяжками к внешней стене Комплекса. Тележка для УЗИ крепится стяжками к полу (Рисунок 66, 66.1).



Рисунок 66, 66.1. Крепление кейса с аппаратом УЗИ и тележки.

- настенное крепление (кронштейн) для кольпоскопа крепится стяжками к стене (Рисунок 67).



Рисунок 67. Крепление кронштейна для кольпоскопа.

- В смотровой кушетке предусмотрены места для транспортировки: спирометра, электрокардиографа, весов напольных, газоанализатора, комплекта ручного ИВЛ, наборов врачей ОП, укладки врача скорой помощи, набора пробных очковых линз с оправой и других приборов (Рисунок 68).



Рисунок 68. Смотровая кушетка, места хранения.

- В навесных полках предусмотрены места для транспортировки: индикатора ВГД, отоскопа, офтальмоскопа, перкуссионного молоточка, камертона, стетоскопа, аппарата для измерения АД, анализатора мочи, глюкометра, емкости для дезинфекции, штативов для пробирок, расходного материала для гематологического анализатора и других приборов (Рисунок 68).



Рисунок 68. Расположение медицинского оборудования в навесных полках.

- Ростомер закреплен неподвижно к стене Комплекса и не требует специального транспортного положения (Рисунок 69).



Рисунок 69. Крепление ростомера.

- Гематологический анализатор имеет стационарное крепление к столешнице и транспортируется в этом же положении, дополнительно накрывается мягким чехлом (Рисунок 71).



Рисунок 71. Гематологический анализатор.



Рисунок 72. Расположение оборудования, на полках в хозяйственном отсеке.

- На полках в хозяйственном отсеке предусмотрены места для транспортировки: Автоматизированных рабочих мест медицинского персонала (компьютеров) в специальных сумках, датчиков для УЗИ аппарата, хозяйственного инвентаря, технологической документации, паспорта, инструкции по эксплуатации и др. (Рисунок 72).

2.2 ПОДГОТОВКА И ПРИВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2.2.1 Подготовка

После проведения медицинского приёма, внутренние и наружные поверхности, установленные в салоне мебель и оборудование, следует протирать чистой ветошью, дополнительно руководствуясь инструкциями на установленное оборудование. Обязательно провести полную дезобработку поверхностей, в соответствии с нормативами для кабинетов медицинского приема. Дезинфекцию воздуха в кабинетах осуществлять периодическим включением бактерицидных облучателей – рециркуляторов, согласно руководству по эксплуатации на облучатели – рециркуляторы, входящий в комплект документации при поставке.

2.2.2 Приведение Комплекса в транспортное положение:

- обесточить медицинское оборудование и привести его в транспортное положение;
- слить воду из электроводонагревателей;
- слить воду из емкостей слива использованной воды (Рисунок 60) и произвести ее дезинфекцию 1% раствором хлорамина по ГОСТ Г-01-76-79;
- произвести отключение всех электроприборов на щите управления;
- отключить источник внешнего электропитания;
- отсоединить конец кабеля от обесточенного источника внешнего электропитания;
- произвести отключение другого конца кабеля от разъема «ВВОД ГОРОД» на Комплексе;
- очистить кабель (с проводом заземления) от пыли и грязи, свернуть и уложить в транспортировочный ящик;
- собрать трап и уложить в отведенный для него ящик;
- зафиксировать двери с помощью винта-барашка.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПЛЕКСА В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Изготовитель гарантирует соответствие Комплекса требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации Комплекса – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при общем пробеге за этот период не более 60000 км.

Гарантийный срок эксплуатации и наработка на базовое транспортное средство, двигатель, шины, аккумуляторные батареи и лампы даются предприятиями-изготовителями в соответствии с утвержденными на них стандартами и ТУ.

Средний срок службы Комплексов должен быть не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления Комплекса путем ремонта. Оценка состояния Комплекса проводится комиссией на основании дефектной ведомости и акта.

Использование Комплекса не по назначению, а также эксплуатация его с нарушением указаний руководства по эксплуатации и внесение каких-либо конструкторских изменений без согласования с разработчиком конструкторской документации, не разрешаются.

В случае невыполнения указанных условий предприятие-изготовитель рекламаций от потребителя не принимает и претензии не рассматривает.

Владелец Комплекса лишается гарантийного обслуживания в следующих случаях:

1. Нарушение указаний и требований, изложенных в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя.
2. Несоблюдение указанных в эксплуатационной документации на медицинские изделия, специальное оборудование и транспортное средство, плановых технических обслуживаний, если это предусмотрено производителем.
3. Повреждение Комплекса в результате дорожно-транспортного происшествия.
4. Замена стандартных медицинского оборудования и агрегатов Комплекса на не предусмотренные конструкцией.
5. Установка дополнительного оборудования, без согласования с заводом-изготовителем.
6. Вынос закрепленного оборудования (при долговременном хранении допускается вынос медицинского оборудования, в состав которого входит оптика и компьютерная техника, обязательно составление описи медицинского оборудования, извлекаемого из Комплекса, один экземпляр которой должен храниться внутри Комплекса).
7. Использование Комплекса не по назначению.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Работоспособность и исправность Комплекса, в том числе находящихся в нем инженерных систем, оборудования, мебели, на протяжении их срока службы (за исключением гарантийного периода) должны обеспечивать эксплуатирующие организации путем проведения технического обслуживания (с периодическим контролем) и ремонта, которые включают в себя ежесменное обслуживание (ЕО), техническое обслуживание (ТО), периодиче-

ское и сезонное обслуживание (СО) и текущий ремонт (ТР).

ЕО проводится ежедневно и включает в себя осмотр Комплекса и выявление возможных неисправностей - проверку действия приборов освещения, отопления и вентиляции, плотности притвора дверей, наличия противопожарных средств, уборку и дезинфекцию помещений.

ТО проводится не реже одного раза в месяц и включает в себя выполнение всех работ ежесменного обслуживания, а также проверку состояния самого Комплекса, его заземления, а также работу всего электрооборудования и освещения путем пробных включений с устранением замеченных неисправностей, инструктажа медицинского персонала.

Первое ТО проводится по истечении 1 месяца первого года эксплуатации, со дня подписания акта сдачи в эксплуатацию. И предусматривает все регламентные работы, а так же контроль за выполнением настоящей инструкции к эксплуатации бригады специалистов, работающих в передвижном Комплексе. В гарантийном талоне делается отметка о соответствующем прохождении 1-го регламентного ТО.

СО проводится не реже одного раза в три - шесть месяцев или после перемещения Комплекса на новое место и включает в себя выполнение всех работ, входящих в ЕО и ТО, а также осмотр и чистку от пыли щита питания, проверку заземления всех электропотребителей, проверку крепления электрооборудования и проводов, проверку состояния наружной и внутренней обшивок, подкраску поверхностей с наружным лакокрасочным покрытием, проверку состояния и работоспособности окон и дверей, замков и защелок, состояние огнетушителей, проверку работы инженерных систем и устранение замеченных неисправностей.

ТР должен проводиться один раз в год (при необходимости) и включать в себя частичное восстановление или замену наружной и внутренней обшивок, полов, теплоизоляции, конструкций дверей и окон, мебели, инженерных систем, подкраску внутренних и наружных поверхностей, проверку сопротивления изоляции электропроводки Комплекса.

Техническое обслуживание, поверка и ремонт оборудования и приборов, установленных в Комплексе, должны производиться в соответствии с указаниями прилагаемых на них документов и регламентов.

Не допускается использование Комплекса, не прошедшего плановые ТО, а также при наличии в конструкциях, инженерных системах, оборудовании и мебели дефектов, которые могут оказать влияние на безопасность находящихся в них людей.

Обслуживание и ремонт шасси Комплекса в течение гарантийного срока необходимо проводить только на станциях технического обслуживания с обязательной отметкой о

проведении работ в талонах сервисной книжки, входящей в комплект документации при поставке.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА.

Регулярно проверяйте:

- надежность креплений мебели и оборудования, при ослаблении необходимо подтянуть болты, винты;
- давление воздуха в шинах;
- состояние резиновых стяжек. Поврежденные резиновые стяжки необходимо заменить;
- чистоту клемм и зажимов аккумуляторных батарей и за надежностью их соединения (шасси транспортного средства и электрогенератора);
- уровни и состояние горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей.

Выхлопные газы ядовиты! Поэтому помещение, в котором производится пуск и прогрев двигателя и электрогенератора, должно хорошо вентилироваться.

Используйте горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, рекомендованные заводами-изготовителями изделий.

Дизельное топливо (или бензин), а так же его пары ядовиты и огнеопасны! Соблюдайте меры предосторожности и правила пожарной безопасности! Избегайте попадания бензина на кожу и одежду, а паров бензина – в дыхательные пути. При заправке транспортного средства и электрогенератора избегайте попадания топлива на лакокрасочное покрытие.

Соблюдайте скоростной режим. При движении по асфальтному покрытию, не превышайте скорость 60 км/ч. При движении по грунтовыми дорогам не превышайте 20 км/ч.

ВНИМАНИЕ! ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДЕФЕКТАМ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ К ПОВРЕЖДЕНИЮ МЕБЕЛИ И КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКСА!

Не нарушайте сроки проведения технического осмотра и регламентных работ. Все работы проводите в полном объеме.

Для длительного сохранения транспортного средства в исправном состоянии рекомендуем проводить сложные работы по техническому обслуживанию на СТО и после окончания гарантийного срока.

6. РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА

№	Опасная ситуация	Вред	Возможная причина
1	1. Перегрев кабельных токопроводящих жил при подключении к преобразователю мощностью более 3000 Вт. 2. Перегрев нагревательных приборов.	Поражение током. Термические ожоги.	1. Внешнее сетевое напряжение. 2. Механическое разрушение корпуса, нарушение изоляции. 3. Подключение непредусмотренных устройств, имеющих подобные разъемы. 4. Подключение устройств с видимыми повреждениями.
2	Превышение дозы ионизирующего излучения	Переоблучение пациентов и персонала	1. Недостаточное экранирование ионизирующего излучения – нарушение при проектировании изделия и монтаже
3	1. Попадание частей тела персонала и пациентов между движущимися элементами оборудования 2. Небезопасное размещение рабочих мест персонала и приема пациентов в кузове-фургоне	Причинение физического вреда пациенту (травмы, переломы)	Близкое расстояние от элементов оборудования, имеющего движущиеся части до рабочих мест персонала и приема пациентов
4	При входе и выходе из транспортного средства появляется возможность оступиться или поскользнуться	Причинение физического вреда пациенту (травмы, переломы)	Опасная проступь входных лестниц и трапов транспортного средства
5	При перемещении людей внутри транспортного средства можно задеть выступающие элементы мебели	Ушибы и поверхностные повреждения тела у персонала и пациентов	Мебель и ее выступающие элементы имеют травмоопасные выступы и мешают проходу персонала и пациентов внутри транспортного средства
6	1. Выделение аллергических компонентов внутренними поверхностями транспортного средства 2. Концентрация вредных химических веществ в салоне Комплекса.	Аллергические реакции пациентов	Неэффективная методика выбора и оценки поставщиков, изделия которых имеют контакт с телом человека
7	Проведение дозиметрического контроля неуполномоченными средствами контроля или средствами контроля с просроченной поверкой	Переоблучение пациентов и персонала пациентов за пределами комплекса	Несоблюдение графика поверки оборудования
8	Несоблюдение правил и условий хранения или эксплуатации изделия в неустановленных условиях.	Снижение срока службы изделия. Отказ изделия.	Нарушение правил и условий хранения.
9	Недостаточное знание медицинского изделия пользователем и неэффективное использование.	Потеря диагностической или иной информации.	Недостаточное обучение. Недостаточная квалификация персонала.
11	Некорректное техническое обслуживание из-за недостаточного знания медицинского изделия пользователем.	Потеря диагностической или иной информации.	Недостаточное обучение. Недостаточная квалификация персонала.
12	Нарушение электрической/механической целостности изделия (Погодные усло-	Выход из строя, повреждение изделия	Удар, вибрация, ветер.

	вия).		
13	Использование непонятных/неверных руководств	Неэффективное использование изделия	Недостаточная информация в руководстве по эксплуатации
14	Недостаточное владение и понимание персоналом рабочих инструкций	Неэффективное использование изделия	Большой объем информации в руководстве по эксплуатации
15	Несоблюдение инструкций по демонтажу и утилизации	Повреждение электрической сети. Поражение электрическим током. Нанесение вреда окружающей среде	Несоответствие порядка утилизации изделия
16	Несрабатывание пожарной сигнализации из-за несоблюдения инструкции по монтажу	Выход из строя, повреждение изделия. Персонал и пациенты могут получить травмы	Монтаж пожарной сигнализации организацией, не имеющей разрешительные документы и опыт.
17	Несрабатывание огнетушителя	Персонал и пациенты могут получить травмы	Неисправный огнетушитель
18	Слишком мощное звуковое оборудование	Персонал и пациенты могут получить повреждение слуха	Установка оборудования, не соответствующего установленным требованиям к допустимым уровням звуковой мощности

7. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Для воспрепятствования появления коррозии необходимо не менее 2х раз в год смазывать соединительные элементы трапов, окон будки, петли дверей и ящиков.

Обслуживание медицинской техники, входящей в состав Комплекса, производится согласно регламентам производителей и инструкциям по эксплуатации, являющимся неотъемлемой частью документации поставляемой вместе с Комплексом.

Перечень регламентных работ на сплит – системах:

А. Проверки на обесточенном оборудовании:

- Внешний осмотр оборудования проверка целостности и надежности крепления компонентов кондиционера, отсутствие течей масла и дренажной воды.
- Проверка и протяжка контактов электрических соединений.
- Проверка отсутствия проводимости силовой цепи - корпус кондиционера.
- Проверка сопротивления рабочих обмоток электродвигателей контакторов, соленоидных вентилей.
- Проверка свободного вращения крыльчаток вентиляторов.
- Чистка воздушных фильтров внутреннего блока.
- Проверка чистоты (при необходимости чистка - не менее 2-х раз в год) теплообменника наружного блока кондиционера.

Б. Проверки на включенном оборудовании:

- Проверка кондиционера на отсутствие посторонних шумов.
- Проверка направления и свободы вращения крыльчаток вентиляторов.
- Измерение рабочих токов электродвигателей кондиционера в рабочих режимах кондиционера.
- Измерение параметров холодильного контура в рабочих режимах.
- Измерение параметров обрабатываемого воздуха в рабочих режимах.
- Оценка состояния кондиционера.
- При обнаружении отклонений в работе кондиционера - планирование и проведение ремонтных или других работ.

В. Сезонная регулировка режимов:

- Выполняется для оборудования оснащенного зимним комплектом, работа которого предусматривается зимой в режиме «Холод», в октябре - ноябре.
- Проверка и регулировка работы замедлителя вентилятора зимнего комплекта.
- Проверка исправности нагревателя картера.
- Проверка исправности нагревателя дренажа.

Перечень регламентных работ на тепловую завесу:

Фильтр необходимо чистить регулярно, поскольку загрязнение будет снижать эффективность работы завесы и ее тепловую мощность. Степень загрязнения фильтра и периодичность чистки определяется местными условиями эксплуатации.

До проведения каких-либо работ, завесу необходимо обесточить.

- 1) Обесточьте завесу.
- 2) Ослабьте винты и откройте сервисный люк, повернув защелки на 90°.

3) Фильтр можно чистить пылесосом или прополоскать в слабо-мыльном растворе. Перед установкой просушить. Замена необходима в случае повреждения или сильной загрязненности моторы вентиляторов и другие элементы не требуют специального обслуживания за исключением периодической очистки. Необходимая периодичность определяется конкретными условиями, но должна производиться не менее 2-х раз в год. Решетки, элементы вентиляторы и внутренние поверхности очищаются с помощью пылесоса или влажной тряпкой. Применение сильнодействующих очистителей не рекомендуется.

Перечень регламентных работ на автономный электрогенератор прописано в инструкции по эксплуатации генератора, входящей в комплект документации при поставке.

Перечень регламентных работ на огнетушители:

Огнетушители диагностируются, обслуживаются, ремонтируются, перезаряжаются (заряжаются) и освидетельствуются только в специализированных пунктах технического обслуживания огнетушителей (ПТОО) имеющих лицензию на выполнение этих работ.

- огнетушители всех типов диагностируются 1 раз в год.
- порошковые огнетушители перезаряжаются 1 раз в два года, а углекислотные 1 раз в 5 лет.
- после использования огнетушителя (тушение загорания, тренировка или случайное срабатывание) огнетушители обязательно перезаряжаются.

Перечень регламентных работ на пожарную сигнализацию:

1) Ежемесячно проверять:

- работоспособность основных и резервных источников питания;
- работоспособность звуковых и световых оповещателей;
- техническое состояние разъемов шлейфов сигнализации, мониторингового и дополнительного оборудования информационных линий и линий электропитания.

2) Не менее 2-х раз в год проводить внешний осмотр составных частей охранно-пожарной сигнализации (приемно-контрольных панелей, извещателей, резервных источников питания, шлейфов сигнализации и кабелей) на отсутствие механических повреждений, коррозии, окисления, а также прочности их крепления и т. д.

Провести техническое диагностирование приборов по методикам производителя. Проверить работоспособность систем в целом.

Перечень регламентных работ на ручномойники накопительного типа:

Не менее 2-х раз в год проверять исправность нагревательного элемента и очищать его от накипи специальными средствами.

Перечень регламентных работ на промышленные вентиляторы:

1. Замена защитной сетки раз в год
2. Лопасты вентилятора очищаются от пыли пылесосом или прополаскиваются в слабомыльном растворе

8. ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Комплекс может транспортироваться в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида своим ходом или авиационным, водным и железнодорожным транспортом без разборки, а также с разборкой на шасси и кузов-фургон в соответствии с договором на поставку.

При транспортировании железнодорожным транспортом, размещение и крепление на открытой платформе или в вагоне должно выполняться в соответствии с требованиями ЦМ-943 «Технических условий размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» МПС России, а также эксплуатационной документации на Комплекс и базовое транспортное средство.

При погрузочных и разгрузочных работах должны быть приняты меры для защиты Комплекса от механических повреждений.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Комплекс должен храниться в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150 не более 1 года. При хранении необходимо учитывать требования к хранению базового транспортного средства и требованиям по хранению других комплектующих изделий.

Если после указанного срока Комплекс не вводится в эксплуатацию, то необходимо произвести его консервацию в соответствии с ГОСТ 9.014 с целью обеспечения его сохранности и работоспособности.

При хранении в закрытых помещениях более 1 месяца производится очистка Комплекса; увеличивается давление воздуха в шинах на 0,5 бара от номинального значения; отпускается стояночный тормоз и устанавливаются противооткатные башмаки; отсоединяется аккумуляторная батарея и связываются кабельные наконечники и зажимы.

При хранении под открытым небом более 1 месяца проводятся те же самые работы, что и при хранении в закрытых помещениях, а также отводятся стеклоочистители от ветрового стекла; закрываются все отверстия для впуска воздуха и устанавливается система отопления на «Выкл.»; демонтируется аккумуляторная батарея и хранится в соответствии с информацией изготовителя.

На площадках хранения Комплекс должен быть размещен с устройством проездов и проходов, обеспечивающих безопасное проведение погрузо-разгрузочных работ, уборку территории.

9. УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация транспортного средства, полуприцепа согласно требованиям заводов изготовителей, указанных в инструкциях на изделия.

Утилизация медицинских изделий и специального оборудования осуществляется в соответствии с классификацией, правилами сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Утилизация медицинского оборудования, содержащего источники ионизирующего излучения, согласно СанПиН 2.6.1.2891.

Утилизации медицинских отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

10. РЕКЛАМАЦИЯ.

Рекламации на обнаруженные дефекты, неисправности или поломки в течение гарантийного срока направляются в сервисную службу ЗАО «НПО «МЕДКАР»:

140104, Московская область, г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 62, ком. 206.

Телефон: +7 (495) 540-45-96. E-mail: med@medcar.ru.

После рассмотрения рекламации изделия или принадлежности, подпадающие под эту гарантию, бесплатно ремонтируются или заменяются.

11. СПИСОК МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАЗРЕШЕННЫЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В КОМПЛЕКСЕ.

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
Медицинское оборудование				
Кабинет «Диагностика»				
1.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
2.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)	1	При необхо- димости
3.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	Производство: АО "ПОЗиС", Россия (ФСР 2012/13836)	1	При необхо- димости
4.	Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005	Производство: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (ФСР 2010/08890)	1	При необхо- димости
5.	Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003	Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2008/02305)	1	При необхо- димости
6.	Набор изделий для оказания ре-анимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004	Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (РЗН 2014/1928)	1	При необхо- димости
7.	Аппарат ультразвуковой диагно-стический с принадлежностями, вариант исполнения: S8Exр	Производство: "СОНОСКЕЙП МЕДИКАЛ КОРП.", Китай (РЗН 2013/1328)	1	При необхо- димости
8.	Прибор цифровой ультразвуковой диагностический М5 с принадлеж-ностями	Производство: «Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР (ФСЗ 2008/01996)	1	При необхо- димости
9.	Прибор ультразвуковой диагности-ческий М7 с принадлежностями	Производство: "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2010/07629).	1	При необхо- димости
10.	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго Е-200	Производство: "Сентек Корея Корп.", Корея (РЗН 2014/1689)	1	При необхо- димости
11.	Аппарат для спирометрии и пуль-соксиметрии MIR с принадлежно-стями, модель: Spirolab III, Spirolab I	Производство: «МИР С.р.л. – МЕДИКАЛ ИНТЕРНЕШНЛ РИСЕРЧ», Италия (РЗН 2017/5323)	1	При необхо- димости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
12.	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр" с принадлежностями по ТУ 9441-019-13218158-2004	Производство: ООО "Нейрософт", Россия (РЗН 2015/3040)	1	При необходимости
13.	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, модель ВМЭН-150	Производство: ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/09964)	1	При необходимости
14.	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНД-01-"Малыш" по ТУ 4274-021-00226454-2002	Производство: ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия (ФСР 2011/11958)	1	При необходимости
15.	Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M6, OMRON M3 Expert	Производство: OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2012/12100)	1	При необходимости
16.	Тонометр механический с принадлежностями, вариант исполнения: big ben	Производство: "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2012/11768)	1	При необходимости
17.	Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEFIB (M110)	Производство: Метракс ГмбХ, Германия (ФСЗ 2011/10093)	1	При необходимости
18.	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 "АКСИОН" по ТУ 9444-162-07530936-2008	Производство: ООО Концерн "Аксион", Россия (ФСР 2008/03509)	1	При необходимости
19.	Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения buck, C-128 Гц	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2010/08456)	1	При необходимости
20.	Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, дерматоскоп gi-derma	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2009/03906)	1	При необходимости
21.	Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках и принадлежности к ним, модели pen-score, gi-score L	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2009/03905)	1	При необходимости
22.	Система скрининга сердца компьютерная "Кардиовизор"	Производство: ООО «Медицинские компьютерные системы», Россия (ФСР 2007/00155)	1	При необходимости
23.	Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-«Р-Д» по ТУ 9441-005-24149103-2003	Производство: ООО «НПП «Монитор», Россия (ФСР 2012/14015)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
24.	Электрокардиограф компьютерный "Поли-Спектр-8/ЕХ" по ТУ 26.60.12-017-13218158-2018	Производство: ООО "Нейрософт", Россия (ФСР 2009/05172)	1	При необхо- димости
25.	Электрокардиограф: FX-2111, FCP-2155, FX-3010, FX-7102, FCP-7101, FX-7302, FX-7202, FX-7402, модель FX-7102, FCP-7101	Производство: «Фукуда Дэнси Ко., Лтд.», Япония (РЗН 2016/4703)	1	При необхо- димости
26.	Электрокардиограф CardiMax с принадлежностями, исполнение: FX-8222	Производство: ФУКУДА ДЭНСИ Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2011/11379)	1	При необхо- димости
27.	Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12ТМ "Альтон" по ТУ 9441-101-14154244-2013, с принадлежностями	Производство: ООО "Альтомедика", Россия. (РЗН 2013/809)	1	При необхо- димости
28.	Электрокардиограф "ЭКГ" по ТУ 9441-001-74487176-2010	Производство: ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2010/08659)	1	При необхо- димости
29.	Дефибриллятор-монитор Dixon с принадлежностями	Производство: "КУ Медикал Системс, Инк.", Республика Корея (ФСЗ 2011/08889)	1	При необхо- димости
30.	Комплекс компьютерный полиграфической регистрации биоэлектрических потенциалов по ТУ 9441-006-12152519-2011, исполнение: Система электроэнцефалографическая "Компакт-нейро"	Производство: ООО НМФ «Нейротех», Россия (ФСР 2011/11685)	1	При необхо- димости
31.	Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения Cardiophon, Duplex de luxe	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2012/12207)	1	При необхо- димости
32.	Стетоскоп Littmann вариант исполнения Littman classic 3 с принадлежностями	Производство: ЗМ Компани", Россия (РЗН 2016/4622)	1	При необхо- димости
33.	Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РЭП	Производство: ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/11607)	1	При необхо- димости
34.	Маммограф электроимпедансный компьютерный для скринингового обследования молочной железы "МЭИК"® по ТУ 9442-001-21702999-2013	Производство: ООО ПКФ «Современная импедансная медицинская техника», Россия (РЗН 2014/2264)	1	При необхо- димости
35.	Угломер ортопедический по ТУ 9452-162-01894927-2005	Производство: ФГУП «ЦИТО», Россия (ФСР 2010/07249)	1	При необхо- димости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
36.	Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 четырех исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм	Производство: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (ФСР 2010/07335)	1	При необхо- димости
37.	Рефлектор лобный оториноларингологический по ТУ 9434-001-44942795-2005	Производства: ООО «Полимерные изделия», Россия (ФСР 2010/07935)	1	При необхо- димости
38.	Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ	Производство: АО «Елатомский приборный завод», Россия (РЗН 2015/2997)	1	При необхо- димости
39.	Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-004-78939528-2009	Производство: ООО «Компания «ЭЛТА», Россия (ФСР 2009/06498)	1	При необхо- димости
40.	Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных осмотров "МЕДРЕГИСТР" по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017	Производство: Общество с ограниченной ответственностью "САНРЭС", Россия (РЗН 2019/8513)	1	При необхо- димости
41.	Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007, исполнение АДР-МП-В, АДР-МП-Д	Производство: ООО «МЕДПЛАНТ», Россия (ФСР 2007/00439)	1	При необхо- димости
42.	Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН" по ТУ 9441-006-26458937-01, исполнение: ВТ-02-1-м 2 (модификация 2)	Производство: ООО «Научно-Медицинская Фирма МБН», Россия (ФСР 2011/10954)	1	При необхо- димости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
43.	Аудиометр автоматизированный АА-02 по ТУ 9441-001-23115390- 2011	Производство: ЗАО «Биомедилен», Россия (ФСР 2011/11116)	1	При необхо- димости
44.	Аудиометры скрининговые, с при- надлежностями	Производство: «МАЙКО» Диагностикс ГмбХ», Германия (РЗН 2013/489)	1	При необхо- димости
45.	Негатоскопы общего назначения НР-"ПОНИ" по ТУ 9452-011- 17459079-2011, исполнение: Негатоскопы общего назначения НР1-01	Производство: ЗАО "Приборы и оборудование для научных исследований", Россия (ФСР 2011/10889)	1	При необхо- димости
46.	Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и под- держанием температуры инфузи- онных растворов ТК-"Медплант" по ТУ 9452-009-52777873-2011	Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2012/13047)	1	При необхо- димости
47.	Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-2 по ТУ ППТД.2955.008	Производство: ООО Пневмоприбор, Россия (ФСР 2009/ 06204)	1	При необхо- димости
48.	Ингалятор кислорода КИ-5 по 9В2.933.227ТУ	Производство: АО "КАМПО", Россия (ФСР 2011/09914)	1	При необхо- димости
49.	Аптечка первой помощи Анти- СПИД - "ВИТАЛФАРМ" по ТУ 9398-022-85535470-2014, модель: «Аптечка первой помощи Анти- СПИД для медицинских, стомато- логических кабинетов и передвиж- ных медицинских бригад» тип 1 - «ВИТАЛФАРМ»	Производство: ЗАО "Виталфарм", Россия (РЗН 2015/2519)	1	При необхо- димости
50.	Набор для минитрахеостомии	Производство: "Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед" ФСЗ № 2009/05211	1	При необхо- димости
51.	Кресло гинекологическое- урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01	Производство: ООО Научно- производственная фирма «Дентофлекс», Россия (ФСР 2008/03499)	1	При необхо- димости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
52.	Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С	Производство: АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585)	1	При необходимости
53.	Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in	Производство: Биокемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия (ФСЗ 2011/10072)	1	При необходимости
54.	Комплект мониторов компьютеризированных носимых одно-, двух-, трехсуточного мониторинга ЭКГ, АД, ЧП КМкн- «СОЮЗ»- «ДМС» по ТУ 9441-001-46816787-2004	Производство: ООО "ДМС Передовые Технологии", Россия (РЗН 2014/1478)	1	При необходимости
55.	Пульсоксиметр медицинский 'Armed', варианты исполнения: YX300, YX301	Производство: "Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2010/07461)	1	При необходимости
56.	Набор диагностический с принадлежностями	Производство: "КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ" (РЗН 2019/8258)	1	При необходимости
57.	Дерматоскопы и наборы диагностические: KaWe Piccolight D, KaWe Eurolight D 30 в комплекте	Производство: "КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ" (РЗН 2015/2924)	1	При необходимости
58.	Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения; глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11А	Производство: ООО "Биосенсор АН", Россия (ФСР 2008/02809)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
59.	Набор реагентов для определения скрытой крови (FOB) в образцах кала человека методом иммунохроматографии (в полосках и кассетах)	Производство: ЭЙБОН Биофарм (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай (РЗН 2016/4086)	1	При необходимости
60.	Тест-полоски MULTICHEK для определения в моче параметров и веществ (от 1 до 15)	Производство: "АйЭнДи Диагностика Инк.", Канада (ФСЗ 2010/07039)	1	При необходимости
61.	Тест иммунохроматографический для выявления гемоглобина в кале (скрытая кровь) «РЭД»	Производство: ООО "РЭД", Россия, (ФСР 2012/13624)	1	При необходимости
62.	Кресло Барани по ТУ 32.50.50-001-61593132-2018	Производство: ООО "Медтехпром+", Россия (РЗН 2018/7299)	1	При необходимости
63.	Стойка медицинская марки «КМ-Магма» в исполнении – стойка медицинская приборная СПз-03	Производство: ООО НПФ Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03971)	2	При необходимости
64.	Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС"	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2009/05705)	1	При необходимости
65.	Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»	Производство: ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
66.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	Производство: ООО Научно-производственная фирма «Костромская медтехника», Россия (ФСР 2008/03973)	Не более 2	При необходимости
67.	Столбы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)	Не более 2	При необходимости
Кабинет «Офтальмология»				
1.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)	1	При необходимости
2.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)	1	При необходимости
3.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836)	1	При необходимости
4.	Авторефрактометр с принадлежностями	Производство: "Хувитц Ко., Лтд" , Республика Корея (ФСЗ 2012/12458)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
5.	Прибор оптический диагностический: офтальмоскоп с принадлежностями, вариант исполнения gi-scope L	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ энд Ко. КГ», Германия (ФСЗ 2012/13162)	1	При необхо- димости
6.	Прибор оптический диагностический: отоскоп с принадлежностями, вариант исполнения e-scope	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ энд Ко. КГ», Германия (ФСЗ 2012/13250)	1	При необхо- димости
7.	Приборы оптические диагностические для оториноларингологии и принадлежности к ним, вариант исполнения gi-scope L	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ энд Ко. КГ», Германия (ФСЗ 2009/03908)	1	При необхо- димости
8.	Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями, вариант исполнения гибкий осветитель gi-magic LED	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2012/12398)	1	При необхо- димости
9.	Бесконтактный тонометр FT-1000 с принадлежностями	Производство: «Томи Гмбх», Германия (ФСЗ 2008/01687)	1	При необхо- димости
10.	Авторефкератометр RC-5000 с принадлежностями	Производство: «ТОМЕЙ Корпорейшн», Япония (РЗН 2015/2726)	1	При необхо- димости
11.	Проектор знаков экранный офтальмологический TCP, с принадлежностями, варианты исполнений: TCP-3000 P	Производство: Томэй ГмбХ, Германия (ФСЗ 2010/07992)	1	При необхо- димости
12.	Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 по ТУ 9442-002- 39589405-2002	Производство: ООО МРП «Техноаргус», Россия (ФСР 2007/00950)	1	При необхо- димости
13.	Щелевая лампа офтальмологическая ручная модели XL-1 в комплекте с принадлежностями	Производство: «Рексам Ко., Лтд.», Япония (РЗН 2016/4151)	1	При необхо- димости
14.	Лампа щелевая офтальмологическая TSL-5000 с принадлежностями	Производство: «Томэй ГмбХ», Германия (ФСЗ 2011/11147)	1	При необхо- димости
15.	Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 по ТУ 9442-001-39589405-2002	Производство: ООО МРП «Техноаргус», Россия (ФСР 2007/00471)	1	При необхо- димости
16.	Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ	Производство: АО «Елатомский приборный завод», Россия (РЗН 2015/2997)	1	При необхо- димости
17.	Периметр автоматический офтальмологический AP-3000 с принадлежностями	Производство: Томэй ГмбХ, Германия (ФСЗ 2011/09934)	1	При необхо- димости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
18.	Проектор знаков офтальмологический "ОПТИОНИКС®" (OPTIONIX®) по ТУ 26.60.12-011-37600580-2020	Производство: ЗАО НПО Медкар, Россия (РЗН 2020/10607)	1	При необходимости
19.	Анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения компьютеризированный АПЗ-30/50/100-«ПЕРИТЕСТ» по ТУ 9442-002-11432330-2003	Производство: ИП Гуров Андрей Сергеевич, Россия (ФСР 2012/13976)	1	При необходимости
20.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	Производство: ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973)	Не более 2	При необходимости
21.	Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)	Не более 2	При необходимости
Кабинет «Женское здоровье»				
1.	Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01	Производство: ООО Научно-производственная фирма «Дентофлекс», Россия (ФСР 2008/03499)	1	При необходимости
2.	Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 по ТУ 9452-021-07614107-2004	Производство: АО «Досчатинский завод медицинского оборудования», Россия (ФСР 2010/07065)	1	При необходимости
3.	Кресло гинекологическое «Грейс» по ТУ 9452-008-74487176-2011	Производство: ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2011/10927)	1	При необходимости
4.	Кольпоскоп КС-02 по ТУ 26.70.22-009-52132018-2018	Производство: ООО «Здоровый Мир», Россия (РЗН 2019/8462)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
5.	Маммограф электроимпедансный компьютерный для скринингового обследования молочной железы "МЭИК"® по ТУ 9442-001-21702999-2013	Производство: ООО ПКФ «Современная импедансная медицинская техника», Россия (РЗН 2014/2264)	1	При необходимости
6.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)	1	При необходимости
7.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)	1	При необходимости
8.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836)	1	При необходимости
9.	Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения Cardiophon, Duplex de luxe	Производство: «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия (ФСЗ 2012/12207)	1	При необходимости
10.	Стетоскоп Littmann вариант исполнения Littman classic 3 с принадлежностями	Производство: "ЗМ Компани", Россия (РЗН 2016/4622)	1	При необходимости
11.	Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 четырех исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм	Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2010/07335)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
12.	Аппарат ультразвуковой диагно- стический серии М с принадлежно- стями, вариант исполнения: М9	Производство: «Шэньчжэнь Майндрэй Био- Медикал Электроникс Ко., Лтд.», КНР (РЗН 2017/6115)	1	При необхо- димости
13.	Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органи- ческих отходов класса Б и В, одно- разовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398- 002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органи- ческих отходов класса Б и В, одно- разовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»	Производство: ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089)	1	При необхо- димости
14.	Набор гинекологический смотро- вой одноразовый стерильный "Ева" по ТУ 9437-045-44942795-2009	Производство: ООО "Полимерные изделия", Россия (ФСР 2010/07047)	1	При необхо- димости
15.	Стетоскоп акушерский деревянный Сад «М-МИЗ» по ТУ 9398-093- 07613473-2003,	Производство: Можайский МИЗ, Россия (ФСР 2007/00787)	1	При необхо- димости
16.	Тест-полоски MULTICHECK для определения в моче параметров и веществ (от 1 до 15)	Производство: "АйЭнДи Диагностика Инк.", Канада (ФСЗ 2010/07039)	1	При необхо- димости
17.	Ёмкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, сте- рилизации и предстерилизацион- ной обработки медицинских изде- лий ЕДПО-С по ТУ 9451-010- 24320270-2014, вариант исполне- ния: ЕДПО-1С	Производство: АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585)	1	При необхо- димости
18.	Контейнеры полимерные с перфо- рированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очист- ки, химической дезинфекции и сте- рилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009- 11769436-2001 в следующих ис- полнениях: - КДС-1; - КДС-3; - КДС-5; - КДС-6; - КДС-6Л-1К; - КДС-6Л-2К; - КДС-10; - КДС-11; - КДС-20; - КДС-30; - КДС-35; - КДС-0,1; - КДС-0,2, исполнение КДС-3	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2009/06144)	1	При необхо- димости
19.	Набор изделий для оказания ре- анимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСР-01-"Мединт- М" по ТУ 9437-010-18585567-2004	Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (РЗН 2014/1928)	1	При необхо- димости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
20.	Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003	Производство: ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2008/02305)	1	При необхо- димости
21.	Набор для минитрахеостомии	Производство: "Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед" (ФСЗ № 2009/05211)	1	При необхо- димости
22.	Термометр медицинский электрон- ный OMRON Eco Temp (MC-203-E)	Производство: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd, Япония (ФСЗ 2009/03887)	1	При необхо- димости
23.	Кресло донорское с управляемым наклоном и штативом КДн- «Диакомс» для размещения донора при взятии крови (угол наклона спинки от 20 до 30 градусов) по ТУ 9452-049-17099103-2002	Производство: ООО "Диакомс" Россия (ФСР 2012/13320)	1	При необхо- димости
24.	Стулья медицинские марки «КМ- Магма» по ТУ 9452-008-32494920- 2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул меди- цинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стомато- логический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	Производство: ООО научно- производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973)	Не более 2	При необхо- димости
25.	Стол� медицинские массажные Heliox с электроприводом, в раз- личных вариантах исполнения, с принадлежностями	Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)	Не более 2	При необхо- димости
Кабинет «Стоматология»				

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
1.	Ванны ультразвуковые электромеханические однокамерные для дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских инструментов "Ультразвук" по ТУ 9451-008-56755207-2009, модель: "Ультразвук-М" УВ-3	Производство: ЗАО «Геософт Дент», Россия (ФСР 2007/00048)	1	При необходимости
2.	Стерилизатор мелких стоматологических инструментов электрический со стеклянными шариками СС-01 "ТермоЭст" по ТУ 9451-001-56755207-2005, модель: - "ТермоЭст"	Производство: ЗАО «Геософт Дент», Россия (ФСР 2010/08560)	1	При необходимости
3.	Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С	Производство: АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585)	1	При необходимости
4.	Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-3, КФ-6, КФ-9, КФ-12, КФ-18, по ТУ 9451-018-07614107-2002 и сменные части: фильтры, исполнение: КФ-3	Производство: АО "Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия (ФСР 2010/07067)	1	При необходимости
5.	Компрессор воздушный поршневой стоматологический КС-60-01 "Стомэл" по ТУ 9452-003-26502549-00	Производство: ООО «СТОМЭЛ-К», Россия (ФСР 2009/05060)	1	При необходимости
6.	Установка стоматологическая STOMADENT HARMONY с принадлежностями	Производство: «СТОМАДЕНТ СК с.р.о.», Словакия (ФСЗ 2008/02141)	1	При необходимости
7.	Установка стоматологическая STOMADENT IMPULS с принадлежностями	Производство: «СТОМАДЕНТ СК с.р.о.», Словакия (ФСЗ 2008/02142)	1	При необходимости
8.	Датчик цифровой дентальный интраоральный RIOSensor модель Ris500	Производство: "Рэй Ко., Лтд.", Корея (РЗН 2018/7470)	1	При необходимости
9.	Аппарат рентгеновский стоматологический Evolution X3000 2С/1 с принадлежностями	Производство: "Нью Лайф Радиолоджи С.р.Л", Италия (ФСЗ 2008/02002)	1	При необходимости
10.	Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных медицинских инструментов- "СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010, исполнение: "СПДС-3-К"	Производство: ООО "СПДС", Россия (ФСР 2010/09347)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
11.	Аппарат рентгеновский дентальный MAX 70 HF/DC с принадлежностями	Производство: "ЦСН Индастри С.р.л.", Италия (РЗН 2017/5415)	1	При необхо- димости
12.	Визиограф стоматологический Rx 2 с принадлежностями	Производство: "ЦСН Индастри С.р.л.", Италия (РЗН 2017/5414)	1	При необхо- димости
13.	Аппараты для локализации апикального сужения корневого канала зуба по ТУ 9452-005- 56755207-2016, вариант исполнения: «ЭндоЭст-3Д»	Производство: ЗАО «Геософт Дент», Россия (ФСР 2007/00078)	1	При необхо- димости
14.	Установка предстерилизационной очистки и смазки стоматологических наконечников: Assistina 301 Plus, с принадлежностями	Производство: "Ви унд Ха Дентал Верк Бюрмоос ГмбХ", Австрия (РЗН 2017/5826)	1	При необхо- димости
15.	Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798- 2005, исполнение: ГП-20 СПУ	Производство: ОАО "Смоленское СКТБ СПУ", Россия (ФСР 2010/07332)	1	При необхо- димости
16.	Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ- 140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168- 07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС"	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2009/05705)	1	При необхо- димости
17.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3- «КРОНТ» по ТУ 9451-029- 11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3- «КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)	1	При необхо- димости
18.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451- 019-11769436-2003	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)	1	При необхо- димости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
19.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836)	1	При необходимости
20.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	Производство: ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973)	Не более 2	При необходимости
21.	Столбы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)	Не более 2	При необходимости
Кабинет «Лаборатория»				
1.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)	1	При необходимости
2.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
3.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836)	1	При необходимости
4.	Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в следующих исполнениях: - КДС-1; - КДС-3; - КДС-5; - КДС-6; - КДС-6Л-1К; - КДС-6Л-2К; - КДС-10; - КДС-11; - КДС-20; - КДС-30; - КДС-35; - КДС-0,1; - КДС-0,2, исполнение КДС-1	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2009/06144)	1	При необходимости
5.	Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» по ТУ 9452-037-11769436-2010	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/10034)	1	При необходимости
6.	Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С	Производство: АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585)	1	При необходимости
7.	Анализатор крови биохимический портативный, модели: CardioChek, CardioChek PA, с принадлежностями, модель: CardioChek PA	Производство: «Полимер Технолоджи Системс, Инк.», США (РЗН 2015/2693)	1	При необходимости
8.	Анализаторы биохимические "ТОРУС" по ТУ 9443-013-74487176-2007	Производство: ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2007/00674)	1	При необходимости
9.	Анализаторы гематологические автоматические "ГЕМАЛАЙТ" по ТУ 9443-011-74487176-2007	Производство: ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2007/00675)	1	При необходимости
10.	Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in	Производство: Биокемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия (ФСЗ 2011/10072)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
11.	Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active) с принадлежностями	Производство: "Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Германия (ФСЗ 2007/00817)	1	При необходимости
12.	Анализаторы мочи CL-50 Plus, CL-500 с принадлежностями, модель: CL-50 Plus	Производство: «Хай Текнолоджи, Инк.», США (РЗН 2016/3986)	1	При необходимости
13.	Пробирки для взятия крови "Проба", вариант исполнения: Пробирки с активатором свертывания	Производство: «Ченгду Рич Сайенс Индастри Ко., Лтд.», Китай (ФСЗ 2010/06301)	1	При необходимости
14.	Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения: MicroCC-20Plus	Производство: «Хай Текнолоджи, Инк.», США (ФСЗ 2010/07756)	1	При необходимости
15.	Центрифуга лабораторная медицинская настольная "Armed"	Производство: "Зенит Лаб (Цзянсу) Ко., Лтд.", Китай (РЗН 2020/10939)	1	При необходимости
16.	Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини)	Производство: 77 Электроника Кфт, Венгрия (РЗН 2019/9342)	1	При необходимости
17.	Анализатор гематологический V-Counter (В-Каунтер) с принадлежностями	Производство: Вест Медика Продукционс-унд Хайдельс-ГмбХ, Австрия (РЗН 2017/5740)	1	При необходимости
18.	Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) CUBE 30 Touch (КУБ 30 ТАЧ), с принадлежностями	Производство: «Диессе Диагностика Сенезе С.п.А.», Италия (РЗН 2019/9149)	1	При необходимости
19.	Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, модель: ГП-10 МО	Производство: АО «Государственный Рязанский приборный завод», Россия (ФСР 2011/10267)	1	При необходимости
20.	Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ»	Производство: ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089)	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
21.	Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ- 140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168- 07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС"	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2009/05705)	1	При необхо- димости
22.	Стулья медицинские марки «КМ- Магма» по ТУ 9452-008-32494920- 2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул меди- цинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стомато- логический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	Производство: ООО научно- производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973)	2	При необхо- димости
23.	Стол�ы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в раз- личных вариантах исполнения, с принадлежностями	Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)	2	
Кабинет «Маммография»				
1.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3- «КРОНТ» по ТУ 9451-029- 11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3- «КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)	1	При необхо- димости
2.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451- 019-11769436-2003	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)	1	При необхо- димости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
3.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	Производство: АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836)	1	При необхо- димости
4.	Комплекс рентгеновский маммо-графический цифровой МАДИС по ТУ У 33.1-14309534-118-2003, с принадлежностями	Производство: Фирма «Радмир» ДП АО НИИРИ, Украина (РЗН 2014/2046)	1	При необхо- димости
5.	Маммограф рентгеновский «Мам-мо-4-«МТ» по ТУ 9442-036-47245915-2011 с принадлежностями	Производство: ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия (ФСР 2008/02328)	1	При необхо- димости
6.	Маммограф рентгеновский «Мам-мо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016	Производство: ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия (РЗН 2017/5930)	1	При необхо- димости
7.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	Производство: ООО научно- производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973)	Не более 2	При необхо- димости
8.	Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)	Не более 2	При необхо- димости
Кабинет «Рентгенодиагностика»				

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
1.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/11388)	1	При необхо- димости
2.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	Производство: АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2011/12132)	1	При необхо- димости
3.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	Производство: АО "ПОЗиС", Россия (ФСР 2012/13836)	1	При необхо- димости
4.	Флюорограф цифровой малодозовый "ФЦМ-Альфа" по ТУ 9442-022-17459079-2009, исполнение: "ФЦМ-Альфа 2К"	Производство: ЗАО «Приборы и оборудование для научных исследований», Россия (ФСР 2009/05372)	1	При необхо- димости
5.	Аппарат рентгеновский палатный передвижной «МобиРен-4МТ-А» по ТУ 9442-054-47245915-2016, исполнение: «МобиРен-4МТ-А»-02	Производство: Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд", Россия (РЗН 2017/6074)	1	При необхо- димости
6.	Аппарат рентгеновский цифровой палатный передвижной «Р-500 «Мобикомпакт» по ТУ 9442-053-47245915-2016	Производство: Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд", Россия (РЗН 2017/6289)	1	При необхо- димости
7.	Ширма рентгенозащитная цельно-металлическая свинцовая по ТУ 9452-009-17459079-2002, исполнение: ШРБ1-"ПОНИ"	Производство: ЗАО «ПОНИ», Россия (ФСР 2011/11811)	1	При необхо- димости
8.	Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-"РЕНЕКС" по ТУ 9398-010-21009821-2004	Производство: ЗАО "РЕНЕКС", Россия (ФСР 2008/03184)	6	При необхо- димости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
9.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	Производство: ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973)	Не более 2	При необходимости
10.	Столбы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	Производство: ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292)	Не более 2	При необходимости
Транспортное средство				
1.	АМС-49415Н	Производство: ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия	1	При необходимости
2.	ПМК-48415Н	Производство: ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия	1	При необходимости
3.	972200	Производство: ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия	1	При необходимости
4.	АЛ-59860С-2	Производство: ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия	1	При необходимости
5.	АФ-47434А	Производство: ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия	1	При необходимости
6.	АФ-371703	Производство: ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия	1	При необходимости
7.	ПМК-48415К	Производство: ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
8.	VFM6AO	Производство: ООО «РусКомТранс», Россия	1	При необхо- димости
9.	878913	Производство: ООО «Форвард», Россия	1	При необхо- димости
10.	185514	Производство: ООО «Форвард», Россия	1	При необхо- димости
11.	692732	Производство: ПАО «КОМЗ», Россия	1	При необхо- димости
12.	385527	Производство: ООО «Форвард», Россия	1	При необхо- димости
Специальное оборудование				
1.	Независимый воздушный и жид- костный отопитель Air Top EVO 55	Производство: «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия	Не более 2	При необхо- димости
2.	Воздушный отопитель AER D5	Производство: «A100», Китай	Не более 2	
3.	Воздушный отопитель модели: Airtronic D4	Производство: Eberspacher Climat Control Systems GmbH & Co. KG., Германия	Не более 2	При необхо- димости
4.	Промышленная воздушная завеса, модель: МЗ	Производство: ООО «ТРОПИК ЛАЙН», Россия	не более 2	При необхо- димости
5.	Воздушная завеса Арктос Мини-3	Производство: ООО «Арктос», Россия	не более 2	При необхо- димости
6.	Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционе- ров, с маркировкой Midea, модель MSMB	Производство: “MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD.”, Сингапур	Не более 2	При необхо- димости
7.	Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционе- ров, с маркировкой Midea, модель <u>MSMAAU-07HRDN1 / MOBA03- 07HFN1</u>	Производство: Midea Group, Китай	Не более 2	При необхо- димости
8.	Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционе- ров, с маркировкой Midea, модель M30G-21HFN8-Q	Производство: Midea Group, Китай	Не более 2	При необхо- димости
9.	Сплит-система т.м. «Dometic»	Производство: “Dometic Italy S.p.a.”, Италия	1	При необхо- димости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
10.	Мульти-сплит система Royal Clima 3RGR-24HN/OUT + 3	Производство: «Royal Clima», Китай	Не более 2	При необходимости
11.	Мульти-сплит система Haier 3U19FS1ERA(N)	Производство: «Haier» Китай	Не более 2	При необходимости
12.	Мульти-сплит система HAIER 4U75S2SR5FA	Производство: «Haier» Китай	Не более 2	При необходимости
13.	Мульти-сплит система HISENSE AMW4-28U4SAC	Производство: «Hisense» Китай	Не более 2	При необходимости
14.	Мульти-сплит система HISENSE AMW2-14U4SRE	Производство: «Hisense» Китай	Не более 2	При необходимости
15.	Мульти-сплит система Royal Clima 3RFM-14HN	Производство: «Royal Clima», Китай	Не более 2	При необходимости
16.	Мульти-сплит система HAIER 2U40S2SM1FA	Производство: «Haier» Китай	Не более 2	При необходимости
17.	Мульти сплит-система, Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER1*3 / MXZ-3HJ50VA ER1	Производство: Mitsubishi Electric Corporation, Тайланд	Не более 2	При необходимости
18.	Накрышный кондиционер Webasto cool top trail	Производство: «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия	1	При необходимости
19.	Электрический кондиционер Auto-clima	Производство: AUTOCLIMA, Италия	1	При необходимости
20.	Электрические аппараты бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: сплит-системы, серия (тип): GC , универсальные блоки, серии (тип) GU	Производство: «General Climate LTD», Китай	Не более 2	При необходимости
21.	Система кондиционирования Mitsubishi Electric в составе наружный блок MXZ + Внутренний блок MSZ	Производство: Mitsubishi Electric Corporation, Япония	Не более 2	При необходимости
22.	Электрогенераторная установка с маркировкой «ELEMАХ», модели: SH6500EX, SH11000, SH7600EX	Производство: «SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD», Япония	1	При необходимости
23.	Дизель-генератор, т.м. «Kubota», модель: J116	Производство: «Kubota Corporation», Япония	1	При необходимости
24.	Дизельный генератор «TOYO», модель TKV-20SPC	Производство: «TOYO DENKI INDUSTRIAL CO.,LTD» Япония	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
25.	Генератор бензиновый инвертор- ный ЗИГ-3500	Производство: ЗАО "Зубр ОВК", Россия	1	При необхо- димости
26.	Генератор Fubag TI 4300	Производство: "Fubag", Германия	1	При необхо- димости
27.	Бензиновый генератор Denzel GT- 2600i (2300 Вт)	Производство: "MATRIZE Handels GmbH", Германия.	1	При необхо- димости
28.	Бензиновый генератор «Energo», Модели: EB7.0/230-YLE, EB7.0/230-HLE, EB 14.0/230-YLE	Производство: «Energo» Россия	1	При необхо- димости
29.	Бензиновый генератор Briggs&Stratton модель: Elite 8500EA	Производство: «Briggs & Stratton» США	1	При необхо- димости
30.	Бензиновый генератор Yamaha Мо- дель: EF 7200 E	Производство: «Yamaha», Китай, Япония	1	При необхо- димости
31.	Бензиновый генератор ZONGSHEN модели: PB 7000 E, KB 7000 E, KB 9000 E, PB 12000E, PB 15000 E	Производитель: «ZONGSHEN INDUSTRIAL GROUP CO., LTD», Китай	1	При необхо- димости
32.	Обогреватель электрический быто- вой конвекционного типа, т.м. «Noirot», модель Spot E-4	Производство: «Noirot S.A.S.», Франция	не более 8	При необхо- димости
33.	Электрический конвектор «Kalash- nikov» модели: KVCH-E10E-11, KVCH-E10M-11	Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия	не более 8	При необхо- димости
34.	Электрический конвектор «Ballu», модели: BEC/EVE-1000, Enzo BEC/EZER-1000, Ettore BEC/ETER- 1000, BEC/SEM-1000, BEC/HMM1000	Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия	не более 8	При необхо- димости
35.	Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса элек- трическая стационарная, т.м. «Ballu», модель ВНС-L08-T03, ВНС-L05S02-S	Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия	не более 2	При необхо- димости
36.	Прибор приемно-контрольный охранный, модель Кварц вариант 2	Производство: ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия	1	При необхо- димости
37.	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный «Вер- сет», модели: ВС-ПК ВЕКТОР-116, ВС-ПК ВЕКТОР-120	Производство: ООО «Версет», Россия	1	При необхо- димости
38.	Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12000Н/1-Ц	Производство: «Ресанта», Китай	1	При необхо- димости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Примечание
39.	Многофункциональный автономный преобразователь энергии МАП SINE, модель PRO	Производство: ООО «МикроАрт», Россия	1	При необходимости
40.	Установка вентиляционная, модель Breezart	Производство: ООО «КЛИМАТСОФТ», Россия	1	При необходимости
41.	Вентилятор промышленный, модель VANVENT	Производство: ООО «ВАНВЕНТ», Россия	1	При необходимости
42.	Окно рентгенозащитное «TISSA» TY BY 600091320/003-2006	Производство: ООО «ТИССА», Республика Беларусь	не более 2	При необходимости
43.	Биотуалет Thetford Porta Potti	Производство: “Thetford”, Нидерланды	не более 2	При необходимости
44.	Независимый воздушный и жидкостный отопитель Air Top EVO 55	Производство: «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия	1	При необходимости
45.	Воздушный отопитель модели: Airtronic D4	Производство: Eberspacher Climat Control Systems GmbH & Co. KG., Германия	1	При необходимости
46.	Промышленная воздушная завеса, модель: МЗ	Производство: ООО «ТРОПИК ЛАЙН», Россия	не более 2	При необходимости
47.	Воздушная завеса Арктиос Мини-3	Производство: ООО “Арктиос”, Россия	не более 2	При необходимости
48.	Холодильник ВВК, RF-068	Производство: ВВК Electronics LTD, КНР	не более 2	При необходимости
49.	Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB	Производство: “MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD.”, Сингапур	1	При необходимости
50.	Сплит-система т.м. «Dometic»	Производство: “Dometic Italy S.p.a.”, Италия	1	При необходимости
51.	Накрышный кондиционер Webasto cool top trail	Производство: «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия	1	При необходимости
52.	Электрический кондиционер Auto-clima	Производство: AUTOCLIMA, Италия	1	При необходимости
53.	Электрические аппараты бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: сплит-системы, серия (тип): GC , универсальные блоки, серии (тип) GU	Производство: «General Climate LTD», Китай	1	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
54.	Система кондиционирования Mitsubishi Electric в составе наружный блок MXZ + Внутренний блок MSZ	Производство: Mitsubishi Electric Corporation, Япония	Не более 2	При необходимости
55.	Электрогенераторная установка с маркировкой «ELEMАХ», модели: SH6500EX, SH11000	Производство: «SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD», Япония	1	При необходимости
Встраиваемая мебель				
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Диспансеризация» на базе транспортного средства АМС-49415Н или VFM6AO или ПМК-48415Н				
1.	Столешница для крепления к стенам БСП161060970	МДКР.0010.000	1	При необходимости
2.	Столешница для крепления к стенам БСП16600600	МДКР.0010.000	1	При необходимости
3.	Столешница для крепления к стенам БСП16850600	МДКР.0010.000	не более 3	При необходимости
4.	Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161520600М	МДКР.0010.000	1	При необходимости
5.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости
6.	Шкаф настенный НШР800500300	МДКР.0010.000	не более 4	При необходимости
7.	Кушетка-рундук КР1800600550	МДКР.0010.000	не более 3	При необходимости
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Профосмотр» на базе транспортного средства 972200				
1.	Столешница для крепления к стенам БСП161000900	МДКР.0010.000	1	При необходимости
2.	Столешница для крепления к стенам БСП161500700	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости
3.	Столешница для крепления к стенам БСП16300300	МДКР.0010.000	1	При необходимости
4.	Столешница для крепления к стенам БСП16800400	МДКР.0010.000	1	При необходимости
5.	Столешница для крепления к стенам БСП16900500	МДКР.0010.000	не более 4	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
6.	Столешница для крепления к стенам БСП16450450	МДКР.0010.000	1	При необходимости
7.	Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161540400М	МДКР.0010.000	1	При необходимости
8.	Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161300500М	МДКР.0010.000	1	При необходимости
9.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости
10.	Шкаф настенный НШР800500300	МДКР.0010.000	не более 8	При необходимости
11.	Кушетка-рундук КР1800600550	МДКР.0010.000	2	При необходимости
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Лучевая диагностика» на базе транспортного средства АЛ-59860С-2				
1.	Столешница для крепления к стенам БСП161500400	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости
2.	Шкаф настенный НШР800500300	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости
3.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	1	При необходимости
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Стоматология» на базе транспортного средства АФ-47434А				
1.	Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161300500М	МДКР.0010.000	2	При необходимости
2.	Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161140500М	МДКР.0010.000	1	При необходимости
3.	Столешница для крепления к стенам БСП16850600	МДКР.0010.000	1	При необходимости
4.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	1	При необходимости
5.	Шкаф настенный НШР800500300	МДКР.0010.000	4	При необходимости
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Офтальмология» на базе транспортного средства АФ-371703				
1.	Столешница для крепления к стенам БСП16900500	МДКР.0010.000	2	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
2.	Столешница для крепления к стенам БСП161350400	МДКР.0010.000	1	При необходимости
3.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	1	При необходимости
4.	Шкаф настенный НШР675400300	МДКР.0010.000	4	При необходимости
5.	Шкаф напольный для одежды ШОР1900800500	МДКР.0010.000	1	При необходимости
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 878913, 185514 или 692732				
1.	Столешница для крепления к стенам БСП16900500	МДКР.0010.000	не более 4	При необходимости
2.	Столешница для крепления к стенам БСП16800400	МДКР.0010.000	не более 3	При необходимости
3.	Столешница для крепления к стенам БСП16300300	МДКР.0010.000	1	При необходимости
4.	Столешница с мойкой для крепления к стенам и полу БСП161140500М	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости
5.	Кушетка-рундук КР1800600550	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости
6.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	не более 3	При необходимости
7.	Шкаф настенный НШР800500300	МДКР.0010.000	не более 3	При необходимости
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Флюорография» на базе транспортного средства 385527 или ПМК-48415К				
1.	Столешница для крепления к стенам БСП16600600	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости
2.	Столешница для крепления к стенам БСП16900500	МДКР.0010.000	1	При необходимости
3.	Столешница для крепления к стенам БСП161500400	МДКР.0010.000	1	При необходимости
4.	Шкаф настенный НШР800500300	МДКР.0010.000	не более 2	При необходимости

№ п/п	Наименование/тип	Обозначение документа, изготовитель	Кол.	Приме- чание
5.	Кушетка-рундук КР1800600550	МДКР.0010.000	1	При необхо- димости
6.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	1	При необхо- димости
Комплекс медицинский передвижной «МЕДКАР» в исполнении «Мам-мография» на базе транспортного средства ПМК-48415К				
1.	Столешница для крепления к стенам БСП16600600	МДКР.0010.000	не более 2	При необхо- димости
2.	Столешница для крепления к стенам БСП16900500	МДКР.0010.000	1	При необхо- димости
3.	Столешница для крепления к стенам БСП161500400	МДКР.0010.000	1	При необхо- димости
4.	Шкаф настенный НШР800500300	МДКР.0010.000	не более 2	При необхо- димости
5.	Кушетка-рундук КР1800600550	МДКР.0010.000	1	При необхо- димости
6.	Умывальник УД16400400	МДКР.0010.000	1	При необхо- димости
Эксплуатационная документация				
1.	Руководство по эксплуатации	МДКР.0010.000 РЭ	1	
2.	Паспорт	МДКР.0010.000 ПС	1	
3.	Эксплуатационные документы на покупные части	РЭ	-	

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией настоящего Комплекса обращаться в

ЗАО «Научно - производственное объединение «МЕДКАР»:

140104, Московская область, г. Раменское, ул. Москворецкая, д. 62, ком. 206

Адрес производства: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Кооперативная, д. 10.

Тел.: +7 (495) 540-45-96.

E-mail: med@medcar.ru

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Габаритные размеры оборудования устанавливаемого в комплексе.

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
Медицинское оборудование			
Кабинет «Диагностика»			
1.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	1100 x 500 x 150	4
2.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	500 x 400 x 150	3
3.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	450 x 400 x 200	5
4.	Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005	350 x 300 x 300	5
5.	Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003	500 x 400 x 200	3
6.	Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСП-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004	700 x 400 x 400	3
7.	Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями, вариант исполнения: S8Exp	900 x 400 x 250	32
8.	Прибор цифровой ультразвуковой диагностический М5 с принадлежностями	1200 x 400 x 500	35
9.	Прибор ультразвуковой диагностический М7 с принадлежностями	700 x 400 x 400	30
10.	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго Е-200	300 x 300 x 200	1
11.	Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR с принадлежностями, модель: Spirolab III, Spirolab I	400 x 300 x 200	3
12.	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр" с принадлежностями по ТУ 9441-019-13218158-2004	400 x 250 x 200	3
13.	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, модель ВМЭН-150	500 x 500 x 100	2
14.	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш" по ТУ 4274-021-00226454-2002	700 x 400 x 450	10

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
15.	Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M6, OMRON M3 Expert	500 x 350 x 300	1
16.	Тонометр механический с принадлежностями, вариант исполнения: big ben	200 x 100 x 100	1
17.	Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEF1-B (M110)	300 x 200 x 100	3
18.	Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 "АКСИОН" по ТУ 9444-162-07530936-2008	300 x 300 x 400	12
19.	Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения buck, C-128 Гц	500 x 300 x 400	8
20.	Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, дерматоскоп gi-derma	200 x 100 x 100	1
21.	Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках и принадлежности к ним, модели pen-scope, gi-scope L	200 x 200 x 100	1
22.	Система скрининга сердца компьютерная "Кардиовизор"	300 x 350 x 250	2
23.	Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-«Р-Д» по ТУ 9441-005-24149103-2003	500 x 500 x 800	5
24.	Электрокардиограф компьютерный "Поли-Спектр-8/EX" по ТУ 26.60.12-017-13218158-2018	500 x 450 x 700	6
25.	Электрокардиограф: FX-2111, FCP-2155, FX-3010, FX-7102, FCP-7101, FX-7302, FX-7202, FX-7402, модель FX-7102, FCP-7101	500 x 400 x 400	5
26.	Электрокардиограф CardiMax с принадлежностями, исполнение: FX-8222	450 x 400 x 150	5
27.	Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12ТМ "Альтон" по ТУ 9441-101-14154244-2013, с принадлежностями,	550 x 450 x 200	5
28.	Электрокардиограф "ЭКГ" по ТУ 9441-001-74487176-2010	500 x 500 x 300	10
29.	Дефибриллятор-монитор Dixon с принадлежностями	450 x 400 x 250	11
30.	Комплекс компьютерный полиграфической регистрации биопотенциалов по ТУ 9441-006-12152519-2011, исполнение: Система электроэнцефалографическая "Компакт-нейро"	600 x 400 x 400	7
31.	Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения Cardiophon, Duplex de luxe	300 x 150 x 300	1
32.	Стетоскоп Littmann вариант исполнения Littman classic 3 с принадлежностями	300 x 150 x 50	1
33.	Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РЭП	200 x 100 x 300	1

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
34.	Маммограф электроимпедансный компьютерный для скринингового обследования молочной железы "МЭИК"® по ТУ 9442-001-21702999-2013	2100 x 300 x 300	4
35.	Угломер ортопедический по ТУ 9452-162-01894927-2005	200 x 200 x 300	1
36.	Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 четырех исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм	600 x 500 x 400	15
37.	Рефлектор лобный оториноларингологический по ТУ 9434-001-44942795-2005	100 x 200 x 50	1
38.	Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ	200 x 100 x 50	1
39.	Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-004-78939528-2009	200 x 150 x 50	1
40.	Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных осмотров "МЕДРЕГИСТР" по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017	800 x 550 x 600	33
41.	Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007, исполнение АДР-МП-В, АДР-МП-Д	500 x 200 x 400	5
42.	Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН" по ТУ 9441-006-26458937-01, исполнение: ВТ-02-1-м 2 (модификация 2)	150 x 100 x 50	2
43.	Аудиометр автоматизированный АА-02 по ТУ 9441-001-23115390-2011	400 x 300 x 150	3
44.	Аудиометры скрининговые, с принадлежностями	400 x 400 x 300	3
45.	Негатоскопы общего назначения НР-"ПОНИ" по ТУ 9452-011-17459079-2011, исполнение: Негатоскопы общего назначения НР1-01	500 x 400 x 150	5

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
46.	Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и поддержанием температуры инфузионных растворов ТК-"Медплант" по ТУ 9452-009-52777873-2011	500 x 400 x 350	4
47.	Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-2 по ТУ ППТД.2955.008	600 x 150 x 150	5
48.	Ингалятор кислорода КИ-5 по 9В2.933.227ТУ	450 x 300 x 150	7
49.	Аптечка первой помощи Анти-СПИД - "ВИТАЛФАРМ" по ТУ 9398-022-85535470-2014, модель: «Аптечка первой помощи Анти-СПИД для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад» тип 1 - «ВИТАЛФАРМ»	400 x 250 x 150	4
50.	Набор для минитрахеостомии	200 x 100 x 100	1
51.	Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01	1200 x 800 x 1500	100
52.	Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С	250 x 150 x 100	1
53.	Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in	100 x 150 x 300	1
54.	Комплект мониторов компьютеризированных носимых одно-, двух-, трехсуточного мониторинга ЭКГ, АД, ЧП КМкн-«СОЮЗ»- «ДМС»	770x620x220	3
55.	Пульсоксиметр медицинский 'Agmed', варианты исполнения: УХ300	100 x 100 x 100	1
56.	Пульсоксиметр медицинский 'Agmed', варианты исполнения: УХ301	100 x 100 x 100	1
57.	Набор диагностический с принадлежностями	200x200x100	2
58.	Дерматоскопы и наборы диагностические Kawe	200x200x100	2

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
59.	Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения; глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11А	200 x 100 x 100	1
60.	Набор реагентов для определения скрытой крови (FOB) в образцах кала человека методом иммунохроматографии (в полосках и кассетах)	200 x 150 x 100	1
61.	Тест-полоски MULTICHEK для определения в моче параметров и веществ (от 1 до 15)	200 x 100 x 100	1
62.	Тест иммунохроматографический для выявления гемоглобина в кале (скрытая кровь) «РЭД»	200 x 100 x 100	1
63.	Кресло Барани по ТУ 32.50.50-001-61593132-2018	600 x 600 x 800	10
64.	Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС"	500 x 500 x 500	12
65.	Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. - «РЕСПЕКТ»	250 x 150 x 150	1

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
66.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	600 x 600 x 800	4
67.	Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	600 x 600 x 700	3
Кабинет «Офтальмология»			
1.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	1100 x 500 x 150	4
2.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	500 x 400 x 150	3
3.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	450 x 400 x 200	5
4.	Авторефкератометр с принадлежностями	500 x 450 x 500	14
5.	Прибор оптический диагностический: офтальмоскоп с принадлежностями, вариант исполнения gi-score L	300 x 200 x 200	2
6.	Прибор оптический диагностический: отоскоп с принадлежностями, вариант исполнения e-score	300 x 300 x 200	2
7.	Приборы оптические диагностические для оториноларингологии и принадлежности к ним, вариант исполнения gi-score L	500 x 800 x 400	10
8.	Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями, вариант исполнения гибкий осветитель gi-magic LED	500 x 800 x 400	10
9.	Бесконтактный тонометр FT-1000 с принадлежностями	700 x 500 x 300	8
10.	Авторефкератометр RC-5000 с принадлежностями	400 x 300 x 300	1
11.	Проектор знаков экранный офтальмологический ТСП, с принадлежностями, варианты исполнений: ТСП-3000 Р	700 x 500 x 300	3

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
12.	Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 по ТУ 9442-002-39589405-2002	400 x 400 x 150	1
13.	Щелевая лампа офтальмологическая ручная модели XL-1 в комплекте с принадлежностями	500 x 500 x 400	5
14.	Лампа щелевая офтальмологическая TSL-5000 с принадлежностями	1000 x 400 x 400	8
15.	Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 по ТУ 9442-001-39589405-2002	500 x 500 x 100	5
16.	Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ	200 x 200 x 100	2
17.	Периметр автоматический офтальмологический АР-3000 с принадлежностями	1000 x 800 x 500	15
18.	Проектор знаков «Оптионикс»	700 x 500 x 300	10
19.	Анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения компьютеризированный АПЗ-30/50/100-«ПЕРИТЕСТ» по ТУ 9442-002-11432330-2003	1000 x 1000 x 200	10
20.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	600 x 600 x 800	4
21.	Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	600 x 600 x 700	3
Кабинет «Женское здоровье»			
1.	Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01	1200 x 800 x 1500	100
2.	Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 по ТУ 9452-021-07614107-2004	1200 x 800 x 1500	40
3.	Кресло гинекологическое «Грейс» по ТУ 9452-008-74487176-2011	1200 x 800 x 1500	120
4.	Кольпоскоп КС-02 по ТУ 26.70.22-009-52132018-2018	400 x 400 x 600	16
5.	Маммограф электроимпедансный компьютерный для скринингового обследования молочной железы "МЭИК"® по ТУ 9442-001-21702999-2013	200 x 200 x 300	2

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
6.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	1100 x 500 x 150	4
7.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	500 x 400 x 150	3
8.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	450 x 400 x 200	5
9.	Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения Cardiophon, Duplex de luxe	400 x 50 x 40	1
10.	Стетоскоп Littmann вариант исполнения Littman classic 3 с принадлежностями	300 x 150 x 50	1
11.	Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 четырех исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм	600 x 500 x 400	15
12.	Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с принадлежностями, вариант исполнения: М9	1200 x 400 x 500	35
13.	Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. - «РЕСПЕКТ»	400 x 500 x 400	6
14.	Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный "Ева" по ТУ 9437-045-44942795-2009	200 x 100 x 100	1
15.	Стетоскоп акушерский деревянный Сад «М-МИЗ» по ТУ 9398-093-07613473-2003, ФСР 2007/00787 от 01.10.2007	200 x 150 x 100	1
16.	Тест-полоски MULTICHECK для определения в моче параметров и веществ (от 1 до 15)	200 x 100 x 100	1
17.	Ёмкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С	250 x 150 x 100	1

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
18.	Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в следующих исполнениях: - КДС-1; - КДС-3; - КДС-5; - КДС-6; - КДС-6Л-1К; - КДС-6Л-2К; - КДС-10; - КДС-11; - КДС-20; - КДС-30; - КДС-35; - КДС-0.1; - КДС-0.2, исполнение КДС-3	350 x 120 x 200	2
19.	Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСП-01- "Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004	700 x 400 x 400	3
20.	Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003	500 x 400 x 200	3
21.	Набор для минитрахеостомии	200 x 100 x 100	1
22.	Термометр медицинский электронный OMRON Eсо Temp (MC-203-E)		
23.	Кресло донорское с управляемым наклоном и штативом КДн-«Диаконс» для размещения донора при взятии крови (угол наклона спинки от 20 до 30 градусов) по ТУ 9452-049-17099103-2002	600 x 400 x 500	15
24.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	1000 x 400 x 400	5
25.	Стол� медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	600 x 600 x 700	3
Кабинет «Стоматология»			
1.	Ванны ультразвуковые электромеханические однокамерные для дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских инструментов "УльтраЭст" по ТУ 9451-008-56755207-2009, модель: "УльтраЭст-М" УВ-3	1200 x 300 x 1000	20
2.	Стерилизатор мелких стоматологических инструментов электрический со стеклянными шариками СС-01 "ТермоЭст" по ТУ 9451-001-56755207-2005, модель: - "Термозст"	500 x 300 x 400	5

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
3.	Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С	300 x 400 x 400	7
4.	Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-3, КФ-6, КФ-9, КФ-12, КФ-18, по ТУ 9451-018-07614107-2002 и сменные части: фильтры, исполнение: КФ-3	100 x 200 x 100	1
5.	Компрессор воздушный поршневой стоматологический КС-60-01 "Стомэл" по ТУ 9452-003-26502549-00	300 x 200 x 300	4
6.	Установка стоматологическая STOMADENT HARMONY с принадлежностями	1300 x 1300 x 1500	48
7.	Установка стоматологическая STOMADENT IMPULS с принадлежностями	1500 x 1500 x 1600	57
8.	Датчик цифровой дентальный интраоральный RIOSensor модель Ris500	500 x 500 x 300	10
9.	Аппарат рентгеновский стоматологический Evolution X3000 2C/1 с принадлежностями	1200 x 500 x 700	45
10.	Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных медицинских инструментов-"СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010, исполнение: "СПДС-3-К"	400 x 400 x 400	5
11.	Аппарат рентгеновский дентальный MAX 70 HF/DC с принадлежностями	500 x 600 x 400	7
12.	Визиограф стоматологический Rx 2 с принадлежностями	500 x 400 x 500	10
13.	Аппараты для локализации апикального сужения корневого канала зуба по ТУ 9452-005-56755207-2016, вариант исполнения: «ЭндоЭст-3Д»	1400 x 1000 x 200	10
14.	Установка предстерилизационной очистки и смазки стоматологических наконечников: Assistina 301 Plus, с принадлежностями	100 x 150 x 200	1
15.	Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение: ГП-20 СПУ	1100 x 500 x 150	4
16.	Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС"	1000 x 600 x 600	25
17.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	1100 x 500 x 150	4

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
18.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	500 x 400 x 150	3
19.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	450 x 400 x 200	5
20.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	1000 x 400 x 400	5
21.	Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	600 x 600 x 700	3
Кабинет «Лаборатория»			
1.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	1100 x 500 x 150	4
2.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	500 x 400 x 150	3
3.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	450 x 400 x 200	5
4.	Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в следующих исполнениях: - КДС-1; - КДС-3; - КДС-5; - КДС-6; - КДС-6Л-1К; - КДС-6Л-2К; - КДС-10; - КДС-11; - КДС-20; - КДС-30; - КДС-35; - КДС-0,1; - КДС-0,2, исполнение КДС-1	300 x 200 x 100	1
5.	Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» по ТУ 9452-037-11769436-2010	100 x 50 x 300	1

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
6.	Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С	250 x 150 x 100	1
7.	Анализатор крови биохимический портативный, модели: CardioChek, CardioChek PA, с принадлежностями, модель: CardioChek PA	500 x 400 x 500	15
8.	Анализаторы биохимические "ТОРУС" по ТУ 9443-013-74487176-2007	550 x 400 x 200	7
9.	Анализаторы гематологические автоматические "ГЕМАЛАЙТ" по ТУ 9443-011-74487176-2007	500 x 500 x 300	9
10.	Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in	100 x 150 x 300	1
11.	Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active) с принадлежностями	150 x 150 x 200	1
12.	Анализаторы мочи CL-50 Plus, CL-500 с принадлежностями, модель: CL-50 Plus	300 x 200 x 100	1
13.	Пробирки для взятия крови "Проба", вариант исполнения: Пробирки с активатором свертывания	300 x 200 x 100	1
14.	Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения: MicroCC-20Plus	500 x 400 x 500	15
15.	Центрифуга лабораторная медицинская настольная "Armed"	300 x 200 x 100	1
16.	Анализатор осадка мочи UriSed mini	300 x 200 x 100	2
17.	Анализатор гематологический V-Counter	500 x 500 x 300	9
18.	Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов CUBE 30	300 x 200 x 100	2
19.	Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, модель: ГП-10 МО	500 x 400 x 500	9
20.	Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. - «РЕСПЕКТ»	1000 x 400 x 500	25
21.	Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС"	1000 x 400 x 400	5

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
22.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	1000 x 400 x 400	5
23.	Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	600 x 600 x 700	3
Кабинет «Маммография»			
1.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	1100 x 500 x 150	4
2.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	500 x 400 x 150	3
3.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	450 x 400 x 200	5
4.	Комплекс рентгеновский маммографический цифровой МАДИС по ТУ У 33.1-14309534-118-2003, с принадлежностями	2000 x 1200 x 1000	45
5.	Маммограф рентгеновский «Маммо-4-«МТ» по ТУ 9442-036-47245915-2011 с принадлежностями	2000 x 1200 x 2000	150
6.	Маммограф рентгеновский «Маммо-4-«МТ» Плюс по ТУ 9442-052-47245915-2016 с принадлежностями	2200 x 1200 x 2000	250
7.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	1000 x 400 x 400	5

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
8.	Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	600 x 600 x 700	1
Кабинет «Рентгенодиагностика»			
1.	Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»	1100 x 500 x 150	4
2.	Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003	500 x 400 x 150	3
3.	Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS")	450 x 400 x 200	5
4.	Флюорограф цифровой малодозовый "ФЦМ-Альфа" по ТУ 9442-022-17459079-2009, исполнение: "ФЦМ-Альфа 2К"	2000 x 1500 x 1000	300
5.	Аппарат рентгеновский палатный передвижной «МобиРен-4МТ-А» по ТУ 9442-054-47245915-2016, исполнение: «МобиРен-4МТ-А»-02	2000 x 1200 x 40	80
6.	Аппарат рентгеновский цифровой палатный передвижной «Р-500 «Мобикомпакт» по ТУ 9442-053-47245915-2016	2000 x 1200 x 400	100
7.	Ширма рентгенозащитная цельнометаллическая свинцовая по ТУ 9452-009-17459079-2002, исполнение: ШРБ1-"ПОНИ"	2000 x 1050 x 710	120
8.	Комплект индивидуальных поливинилхлоридных средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения «Кисз-«РЕНЕКС»	1500x600x100	10
9.	Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ.	1000 x 400 x 400	5
10.	Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями	600 x 600 x 700	1
Транспортное средство			
1.	АМС-49415Н	10417 x 2550 x 3900	25000

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
2.	ПМК-48415Н	10417 x 2550 x 3900	25000
3.	972200	15500 x 2550 x 3900	39000
4.	АЛ-59860С-2	9992 x 2550 x 3900	25200
5.	АФ-47434А	7890 x 2300 x 3380	5650
6.	АФ-371703	6535 x 2200 x 3450	3500
7.	VFM6АО	10417 x 2550 x 3900	25000
8.	878913	5000 x 2100 x 3300	3500
9.	185514	6100 x 2100 x 3250	3500
10.	692732	9905 x 2470 x 3900	18800
11.	385527	7400 x 2400 x 3150	8700
12.	ПМК-48415К	7700x2550x3700	12000
Специальное оборудование			
1.	Независимый воздушный и жидкостный отопи- тель Air Top EVO 55	400 x 300 x 300	5
2.	Воздушный отопитель модели: Airtronic D4	400 x 300 x 300	5
3.	Воздушный отопитель AER D5	389 x 140 x 140	4,5
4.	Промышленная воздушная завеса, модель: МЗ	600 x 200 x 400	3
5.	Воздушная завеса Арктос Мини-3	400 x 250 x 200	5
6.	Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB	900 x 800 x 500	30
7.	Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMAAU-07HRDN1 / MOBA03-07HFN1	285 x 715 x 205	26
8.	Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель M30G-21HFN8-Q	890 x 673 x 342	43.3
9.	Сплит-система т.м. «Dometic»	600 x 200 x 400	20
10.	Мульти-сплит система Royal Clima 3RGR- 24HN/OUT + 3	654 x 889 x 340	48
11.	Мульти-сплит система Haier 3U19FS1ERA(N)	810 x 288 x 688	51
12.	Мульти-сплит система HAIER 4U75S2SR5FA	890 x 340 x 700	61
13.	Мульти-сплит система HISENSE AMW4- 28U4SAC	950 x 840 x 340	67
14.	Мульти-сплит система HISENSE AMW2- 14U4SRE	730 x 536 x 260	33
15.	Мульти-сплит система Royal Clima 3RFM-14HN	554 x 800 x 333	32
16.	Мульти-сплит система HAIER 2U40S2SM1FA	800 x 553 x 280	54
17.			
18.	Накрышный кондиционер Webasto cool top trail	600 x 400 x 500	18
19.	Электрический кондиционер Autoclima	500 x 450 x 450	23
20.	Электрические аппараты бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: сплит-системы, серия (тип): GC универсальные блоки, серии (тип) GU	700 x 700 x 600	45
21.	Система кондиционирования Mitsubishi Electric в составе наружный блок MXZ + Внутренний блок MSZ	650 x 700 x 500	50
22.	Электрогенераторная установка с маркировкой «ELEMАХ», модели: SH6500EX, SH11000, SH- 7600EX	708 x 548 x 493 924 x 665 x 636 708 x 548 x 493	75 158 78


№ п/п	Наименование	Габаритные размеры (Длина x Ширина x Высота), не более мм	Вес, не более кг
23.	Дизельный генератор «TOYO», модель TKV-20SPC	1250 x 611 x 922	440
24.	Бензиновый генератор «Energol», Модели: EB7.0/230-YLE, EB7.0/230-HLE, EB 14.0/230-YLE	835 x 550 x 540 840 x 550 x 540 900 x 660 x 650	80 76 130
25.	Бензиновый генератор Briggs&Stratton модель: Elite 8500EA	720 x 540 x 630	105
26.	Бензиновый генератор Yamaha Модель: EF 7200 E	670 x 540 x 570	93
27.	Бензиновый генератор ZONGSHEN модели: PB 7000 E, KB 7000 E, KB 9000 E, PB 12000E, PB 15000 E	700 x 530 x 590 700 x 530 x 590 700 x 530 x 590 770 x 600 x 790 690 x 530 x 560	83 90 99 138 85
28.	Дизель-генератор, т.м. «Kubota», модель: J116	1300 x 611 x 922	380
29.	Генератор бензиновый инверторный ЗИГ-3500	700 x 700 x 500	40
30.	Генератор Fubag TI 4300	450 x 450 x 500	30
31.	Бензиновый генератор Denzel GT-2600i (2300 Вт)	600 x 500 x 300	65
32.	Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа, т.м. «Noirot», модель Spot E-4	1000 x 1000 x 300	5
33.	Электрический конвектор «Kalashnikov» модели: KVCH-E10E-11, KVCH-E10M-11	460x103x400 460x83x400	3,3 3,3
34.	Электрический конвектор «Ballu», модели: BEC/EVE-1000, Enzo BEC/EZER-1000, Ettore BEC/ETER-1000, BEC/SEM-1000, BEC/HMM1000	480x111x413, 460x113x400 460x113x400 460x89x400 480x111x413	3,56 3,3 3,3 3 3,44
35.	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный «Версет», модели: ВС-ПК ВЕКТОР-116, ВС-ПК ВЕКТОР-120	280x103x35 254x165x39	0,5 0,6
36.	Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса электрическая стационарная, т.м. «Ballu», модель BHC-L08-T03, BHC-L05S02-S	810x140x180 500x180x130	6 4
37.	Прибор приемно-контрольный охранный, модель Кварц вариант 2	300 x 300 x 100	5
38.	Холодильник BBK, RF-068	465x510x645	19,15
39.	Многофункциональный автономный преобразователь энергии МАП SINE, модель PRO	600 x 400 x 200	25
40.	Установка вентиляционная, модель Breezart	700 x 300 x 300	40
41.	Вентилятор промышленный, модель VANVENT	400 x 400 x 100	3
42.	Окно рентгенозащитное «TISSA» TY BY 600091320/003-2006	1000 x 1000 x 100	50
43.	Биотуалет Thetford Porta Potti	500 x 400 x 400	15

Габаритные размеры и масса мебели, встраиваемой в Комплекс


Размеры выражены в мм

Столешницы для крепления к стенам:


1) БСП161000900

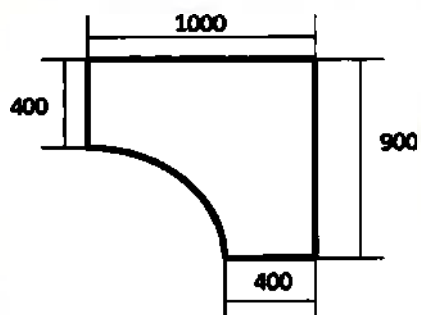


$m=12,6$ кг

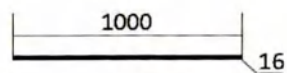


2) БСП161500700

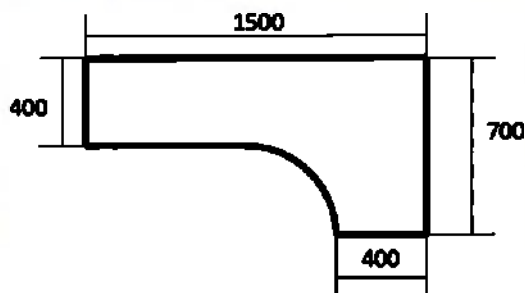


$m=14,3$ кг

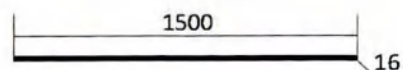


3) БСП161060970

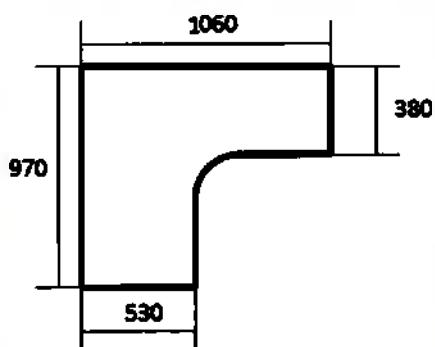


$m=14$ кг

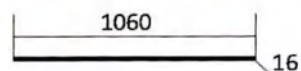


4) БСП16600600

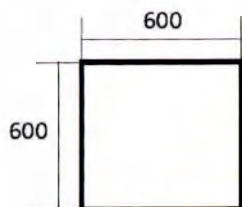


$m=8,7$ кг

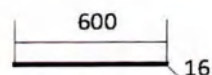


5) БСП16300300

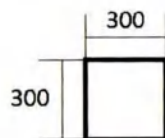


m=4 кг

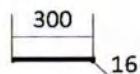


6) БСП16800400

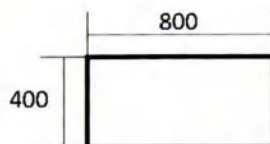


m=8,5 кг

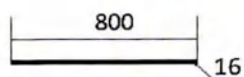


7) БСП16850600

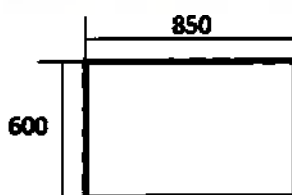


m=9,5 кг

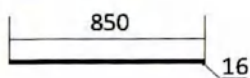


8) БСП16900500

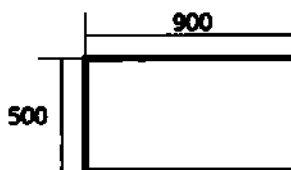


m=9,5 кг

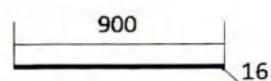


9) БСП161500400

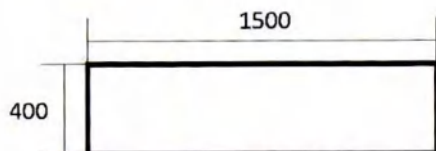


m=13,1 кг

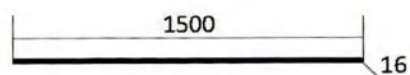


10) БСП161350400

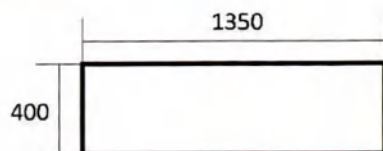


m=12,3 кг

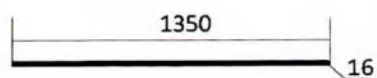

11) БСП16450450

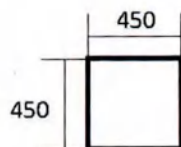


m=5,4 кг

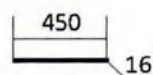


Столешницы с мойкой для крепления к стенам и полу:


12) БСП161540400М

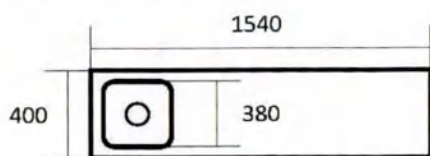


m=23,2 кг

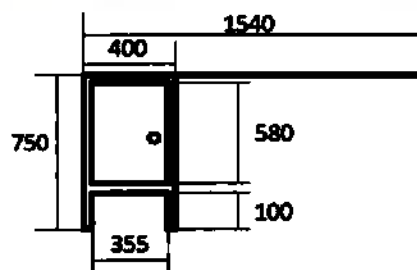


13) БСП161520600М

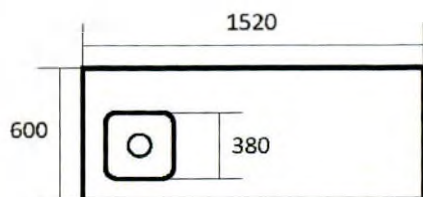


m=25 кг

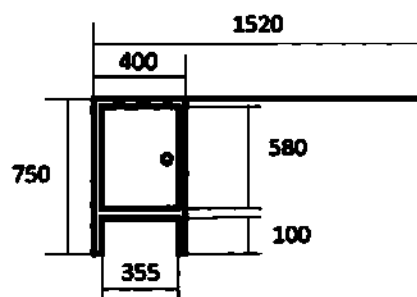


14) БСП161300500М

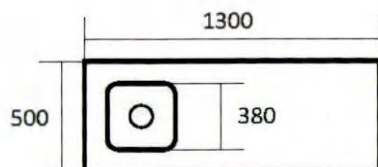


m=23 кг

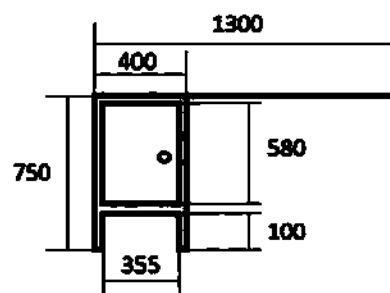

15) БСП161140500М

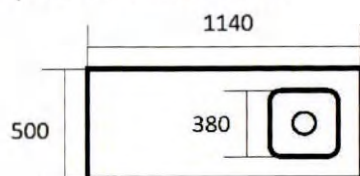


m=21,8 кг

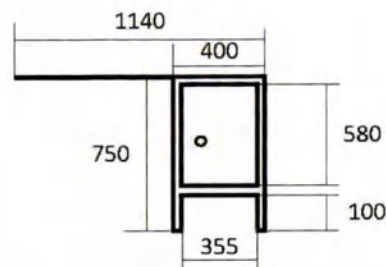


Умывальник:

16) УД16400400

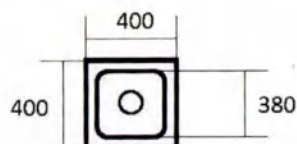


m=11,1 кг

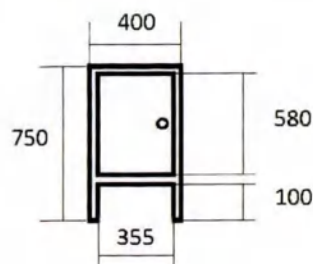


Шкафы настенные:


17) НШР800500300

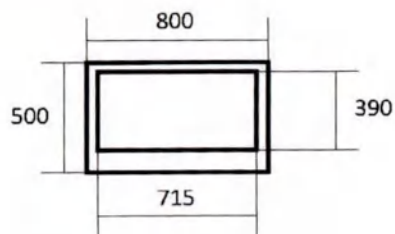


m=10 кг

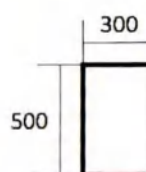

18) НШР675400300

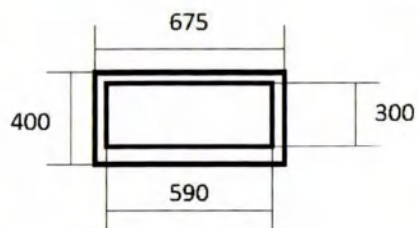


m=9,1 кг

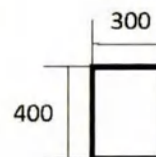


Шкаф напольный для одежды:

19) ШОР1900800500

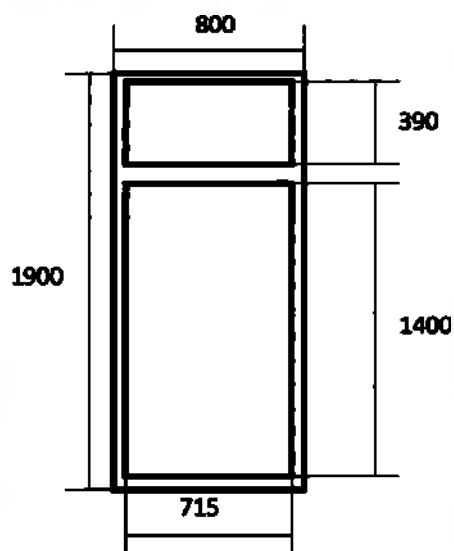


m=46,3 кг

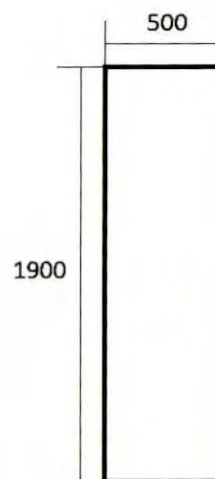


Кушетка-рундук:

20) КР1800600550

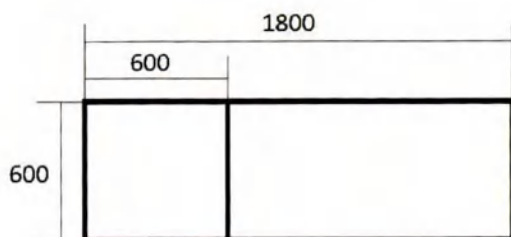

m=35,5 кг

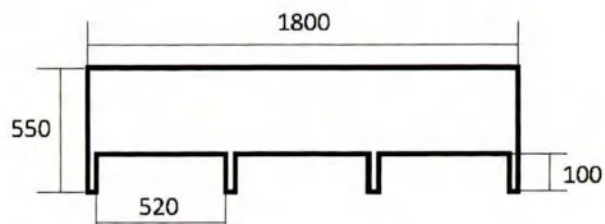

**Назначение медицинских изделий и специального оборудования,
используемых в Комплексе**

Кабинет «Диагностика»:

1. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) – 1 шт. - обеспечивают наивысшую степень дезинфекции в диагностическом кабинете.
2. Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2012/13836) – 1шт. – обеспечивает наивысшую степень защиты в диагностическом кабинете.
3. Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), производства АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836) 1 шт. – предназначен для обеззараживания воздуха.
4. Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"Мединт-М" в сумке медицинской универсальной СМУ-03 по ТУ 9437-012-18585567-2005, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2010/08890) – 1 шт. - предназначен для хранения медицинских принадлежностей в диагностическом кабинете.
5. Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2008/02305) – 1 шт. - предназначен для оказания неотложной медицинской помощи на до-госпитальном этапе
6. Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСР-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (РЗН 2014/1928) – 1 шт. - предназначен для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет.
7. Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями, вариант исполнения: S8Exp, производства "СОНОСКЕЙП МЕДИКАЛ КОРП.", Китай (РЗН 2013/1328) – 1 шт. – система ультразвуковой диагностики
8. Прибор цифровой ультразвуковой диагностический М5 с принадлежностями, производства "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2008/01996) – 1 шт. - система ультразвуковой диагностики.

9. Прибор ультразвуковой диагностический М7 с принадлежностями, производства "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2010/07629) – 1 шт. - система ультразвуковой диагностики
10. Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго Е-200), производства "Сентек Корея Корп.", Корея (РЗН 2014/1689) – 1 шт. - предназначен для измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе.
11. Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR с принадлежностями, модель: Spirolab III, Spirolab I, производства "МИР С.р.л. - МЕДИКАЛ ИНТЕРНЕШНЛ РИСЕРЧ", Италия (РЗН 2017/5323) – 1 шт. - Определение функций и исследование внешнего дыхания.
12. Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких "Спиро-Спектр" с принадлежностями по ТУ 9441-019-13218158-2004, производства ООО "Нейрософт", Россия, (РЗН 2015/3040) -1шт. – предназначен для измерения объема воздуха, поступающего из лёгких.
13. Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005, модель ВМЭН-150, производства ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/09964) – 1 шт. - предназначены для взвешивания людей в диагностическом кабинете.
14. Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНд-01-"Малыш" по ТУ 4274-021-00226454-2002, производства ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия (ФСР 2011/11958) – 1 шт. - предназначены для взвешивания детей в кабинете.
15. Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические, вариант исполнения OMRON M6, OMRON M3 Expert производства OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2012/12100) – 1 шт. используется для измерения артериального давления.
16. Тонометр механический с принадлежностями, вариант исполнения: big ben, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2012/11768) – 1 шт. - предназначен для измерения артериального давления.
17. Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями, вариант исполнения PRIMEDIC DEFI-B (M110), производства Метракс ГмбХ, Германия (ФСЗ 2011/10093) – 1 шт. – предназначен для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма.
18. Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 "АКСИОН" по ТУ 9444-162-07530936-2008, производства ООО Концерн "Аксион", Россия (ФСР 2008/03509) – 1 шт. - предназначен для

электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма.

19. Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения: busk, C-128 Гц, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2010/08456) – 1 шт. - диагностика нервной и слуховой проводимости.

20. Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, дерматоскоп gi-derma, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2009/03906) – 1 шт. - предназначен для диагностики поражений и изменений кожи посредством микроскопии в падающем свете.

21. Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках и принадлежности к ним, модели rep-score, gi-score L, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2009/03905) – 1 к-т. - предназначен для диагностики органов зрения.

22. Система скрининга сердца компьютерная "Кардиовизор", производства ООО "Медицинские компьютерные системы", Россия (ФСР 2007/00155) – 1 шт. - экспресс-оценка функционального состояния сердца с помощью дисперсионного картирования ЭКГ-сигнала от конечностей. - система для снятия электрокардиограммы в диагностическом кабинете.

23. Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-«Р-Д» по ТУ 9441-005-24149103-2003, производства ООО "НПП "Монитор", Россия (ФСР 2012/14015) – 1 шт. - система для снятия электрокардиограммы в диагностическом кабинете.

24. Электрокардиограф компьютерный "Поли-Спектр-8/EX" по ТУ 26.60.12-017-13218158-2018, производства ООО "Нейрософт", Россия, (ФСР 2009/05172) – 1 шт. - предназначен для снятия электрокардиограммы в диагностическом кабинете.

25. Электрокардиограф: FX-2111, FCP-2155, FX-3010, FX-7102, FCP-7101, FX-7302, FX-7202, FX-7402, модель FX-7102, FCP-7101, производства "Фукуда Дэнси Ко., Лтд.", Япония (РЗН 2016/4703) – 1 шт. - система для снятия электрокардиограммы в диагностическом кабинете.

26. Электрокардиограф CardiMax с принадлежностями, исполнение: FX-8222 производства ФУКУДА ДЭНСИ Ко., Лтд., Япония (ФСЗ 2011/11379) -1 шт. - система для снятия электрокардиограммы в диагностическом кабинете.

27. Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12ТМ "Альтон" по ТУ 9441-101-14154244-2013, с принадлежностями, производства ООО "Альтомедика", Россия (РЗН 2013/809) - 1 шт. - система для снятия электрокардиограммы в диагностическом кабинете.

28. Электрокардиограф "ЭКГ" по ТУ 9441-001-74487176-2010, производства ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2010/08659) – 1шт. - система для снятия электрокардиограммы в диагностическом кабинете
29. Дефибриллятор-монитор Dixon с принадлежностями, производства "КУ Медикал Системс, Инк.", Республика Корея (ФСЗ 2011/08889) -1шт.- предназначен для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма.
30. Комплекс компьютерный полиграфической регистрации биопотенциалов по ТУ 9441-006-12152519-2011, исполнение: Система электроэнцефалографическая "Компакт-нейро", производства ООО НМФ "Нейротех", Россия (ФСР 2011/11685) – 1 шт.- система для диагностики заболеваний центральной нервной системы
31. Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения Cardiophon, Duplex de luxe, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2012/12207) – 1 шт. - прибор для выслушивания (аускультации) шумов внутренних органов: лёгких, бронхов, сердца, сосудов, кишечника.
32. Стетоскоп Littmann вариант исполнения Littman classic 3 с принадлежностями, производства ЗМ Компани", Россия (РЗН 2016/4622) - 1шт. - прибор для выслушивания (аускультации) шумов внутренних органов: лёгких, бронхов, сердца, сосудов, кишечника.
33. Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 в следующих исполнениях: РЭП, РЭС, РП и РС, исполнение РЭП, производства ОАО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС», Россия (ФСР 2011/11607) – 1 шт. - предназначен для измерения роста взрослых и детей.
34. Маммограф электроимпедансный компьютерный для скринингового обследования молочной железы "МЭИК"® по ТУ 9442-001-21702999-2013, производства ООО ПКФ "Современная импедансная медицинская техника", Россия (РЗН 2014/2264) – 1 шт. - Диагностика патологических и непатологических изменений тканей молочной железы.
35. Угломер ортопедический по ТУ 9452-162-01894927-2005, производства ФГУП «ЦИТО», Россия (ФСР 2010/07249) – 1 шт. - предназначен для измерения углов движений в суставах, а также для определения кривизны оси конечности и позвоночника у взрослых и детей.
36. Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 четырех исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в ме-

таллическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2010/07335) – 1 шт. – предназначена для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи.

37. Рефлектор лобный оториноларингологический по ТУ 9434-001-44942795-2005, производства ООО "Полимерные изделия", Россия (ФСР 2010/07935) – 1 шт. - предназначено для освещения отраженным светом уха, горла и носа во время проведения диагностических осмотров. - служит в качестве источника чистого безмасляного сжатого воздуха для дыхательного оборудования.

38. Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ, производства АО «Елатомский приборный завод», Россия (РЗН 2015/2997) – 1 шт. - предназначен для измерения внутриглазного давления.

39. Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с полоской электрохимической однократного применения ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС», ПКГ-03 «САТЕЛЛИТ ЭКСПРЕСС МИНИ» по ТУ 9443-004-78939528-2009, производства ООО «Компания «ЭЛТА», Россия (ФСР 2009/06498) – 1 шт. - предназначен для экспресс-измерения концентрации глюкозы в крови.

40. Автоматизированная система проведения дистанционных предрейсовых / послерейсовых, предсменных / послесменных осмотров "МЕДРЕГИСТР" по ТУ 26.60.12-001-29440470-2017, производства Общество с ограниченной ответственностью "САНРЭС", Россия (РЗН 2019/8513) – 1шт. – предназначена для проведения дистанционного осмотра

41. Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д, КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007, исполнение АДР-МП-В, АДР-МП-Д, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2007/00439) – 1 шт. предназначено для принудительной подачи кислорода в лёгкие с целью насыщения крови кислородом и удаления из лёгких углекислого газа.

42. Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН" по ТУ 9441-006-26458937-01, исполнение: ВТ-02-1-м 2 (модификация 2), производства ООО "Научно-Медицинская Фирма МБН", Россия (ФСР 2011/10954) – 1 шт. - прибор для измерения вибрационной чувствительности человека

43. Аудиометр автоматизированный АА-02 по ТУ 9441-001-23115390-2011, производства ЗАО "Биомедилен", Россия (ФСР 2011/11116) – 1 шт. - прибор для точного определения остроты слуха.

44. Аудиометры скрининговые, с принадлежностями, производства «МАЙКО Диагностика ГмбХ», Германия – 1шт.- прибор для точного определения остроты слуха.
45. Негатоскопы общего назначения НР-"ПОНИ" по ТУ 9452-011-17459079-2011, исполнение: Негатоскопы общего назначения НР1-01, производства ЗАО "Приборы и оборудование для научных исследований", Россия (ФСР 2011/10889) – 1 шт. - предназначен для изучения рентгеновских снимков в необходимом свете.
46. Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и поддержанием температуры инфузионных растворов ТК-"Медплант" по ТУ 9452-009-52777873-2011, производства, ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2012/13047) – 1 шт. - предназначен для создания и поддержания рабочего температурного режима инфузионных растворов при транспортировании
47. Редуктор-ингалятор кислородный КРИ-2 по ТУ ППТД.2955.008, производства ООО Пневмоприбор, Россия (ФСР 2009/ 06204) – 1 шт. - предназначен для понижения давления кислорода с давления в кислородном баллоне до заданной величины.
48. Ингалятор кислорода КИ-5 по 9В2.933.227ТУ, производства АО "КАМПО", Россия (ФСР 2011/09914) – 1 шт. - предназначен для проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии на месте происшествия.
49. Аптечка первой помощи Анти-СПИД - "ВИТАЛФАРМ" по ТУ 9398-022-85535470-2014, модель: «Аптечка первой помощи Анти-СПИД для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных медицинских бригад» тип 1 - «ВИТАЛФАРМ», производства ЗАО "Виталфарм", Россия (РЗН 2015/2519) – 1 шт. - предназначен для оказания доврачебной само- и взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях.
50. Набор для минитрахеостомии, производства "Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед" ФСЗ № 2009/05211– 1 шт. - предназначен для аспирации дыхательных путей.
51. Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01, производства ООО Научно-производственная фирма «Дентофлекс», Россия (ФСР 2008/03499) – 1шт. - предназначено для гинекологических, урологических и проктологических осмотров и манипуляций
52. Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С, производства АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585) – 1 шт. - предназначен для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий.

53. Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in, производства Биокемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия (ФСЗ 2011/10072) – 1 шт. - предназначен для количественного исследования клеток крови.
54. Комплект мониторов компьютеризированных носимых одно-, двух-, трехсуточного мониторингирования ЭКГ, АД, ЧП КМкн-«СОЮЗ»- «ДМС» - Производство: ООО "ДМС Передовые Технологии", Россия (РЗН 2014/1478) - 1 шт. – предназначен для суточного мониторингирования пациента.
55. Пульсоксиметр медицинский 'Armed', варианты исполнения: YX300, YX301, производства "Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", КНР (ФСЗ 2010/07461) – 1 шт. - предназначен для измерения частоты пульса и уровня насыщения крови кислородом.
56. Набор диагностический с принадлежностями Производство: "КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ" (РЗН 2019/8258) – 1 шт. – предназначен для отоларингологических обследований
57. Дерматоскопы и наборы диагностические: KaWe Piccolight D, KaWe Eurolight D 30 в комплекте Производство: "КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ" (РЗН 2015/2924) – 1 шт. – предназначен для исследований заболеваний кожи
58. Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018, вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения; глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11А, производства ООО "Биосенсор АН", Россия (ФСР 2008/02809) – 1 шт. - предназначен для измерения характеристик крови.
59. Набор реагентов для определения скрытой крови (FOB) в образцах кала человека методом иммунохроматографии (в полосках и кассетах), производства ЭЙБОН Биофарм (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай (РЗН 2016/4086) – 1 шт. - предназначен для определения крови в образцах кала
60. Тест-полоски MULTICHECK для определения в моче параметров и веществ (от 1 до 15), производства "АйЭнди Диагностик Инк.", Канада (ФСЗ 2010/07039) – 1 шт. - предназначен для определения в моче параметров веществ

61. Тест иммунохроматографический для выявления гемоглобина в кале (скрытая кровь) «РЭД» , производства ООО "РЭД" , Россия, (ФСР 2012/13624) – 1 шт. - предназначен для выявления гемоглобина в кале.

62. Кресло Барани по ТУ 32.50.50-001-6159132-2018 - специальный вращающийся в горизонтальной плоскости стул для исследования вестибулярного аппарата. производства ООО "Медтехпром+", Россия (РЗН 2018/7299) – 1 шт.

63. Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС", производства АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2009/05705) – 1 шт. - предназначен для хранения лекарственных препаратов, реагентов и биологических образцов

64. Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ», производства ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089) – 1 шт. - предназначен для сбора острого инструментария и органических отходов.

65. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) – 2 шт.- предназначены для сидения одного человека, со спинкой и сиденьем с подлокотниками или без них.

66. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292) -2 шт. - предназначены для сидения одного человека.

Кабинет «Офтальмология»:

1. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) – 1 шт. обеспечивают наивысшую сте-

пень дезинфекции в офтальмологическом кабинете.

2. Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2012/13836) – 1 шт. – обеспечивает наивысшую степень защиты в диагностическом кабинете.

3. Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), производства АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836) 1 шт. – предназначен для обеззараживания воздуха.

4. Авторефкератометр с принадлежностями, производства "Хувитц Ко., Лтд", Республика Корея (ФСЗ 2012/12458) -1шт. - используется для определения нарушений оболочки роговицы

5. Прибор оптический диагностический: офтальмоскоп с принадлежностями, вариант исполнения gi-score L, производства "Рудольф Ристер ГмбХ энд Ко. КГ", Германия (ФСЗ 2009/03908; ФСЗ 2012/13162) – 1 шт. - ручной оптический прибор, при помощи которого производится осмотр глазного дна и роговицы глаза.

6. Прибор оптический диагностический: отоскоп с принадлежностями, вариант исполнения e-score, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2012/13250) – 1 шт. – ручной оптический прибор, при помощи которого производится диагностика патологий уха, горла, носа.

7. Приборы оптические диагностические для оториноларингологии и принадлежности к ним, вариант исполнения gi-score L, производства "Рудольф Ристер ГмбХ энд Ко. КГ", Германия (ФСЗ 2009/03908) – 1 шт. – ручной оптический прибор, при помощи которого производится диагностика патологий уха, горла, носа.

8. Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями, вариант исполнения гибкий осветитель gi-magic LED, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2012/12398) – 1 шт.- предназначены для исследования и распознавания мелких деталей.

9. Бесконтактный тонометр FT-1000 с принадлежностями, производства "Томи Гмбх", Германия (ФСЗ 2008/01687) – 1 шт. - измерение внутриглазного давления через верхнее веко.

10. Авторефкератометр RC-5000 с принадлежностями, производства «ТОМЕЙ Корпорейшн», Япония (РЗН 2015/2726) – 1 шт. – предназначен для офтальмологических диагностических обследований.

11. Проектор знаков экранный офтальмологический ТСП, с принадлежностями, варианты исполнений: ТСП-3000 Р, производства Томэй ГмбХ, Германия (ФСЗ 2010/07992) – 1

шт. – предназначен для определения остроты зрения для дали, астигматизм и направление главных меридианов астигматического глаза.

12. Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 по ТУ 9442-002-39589405-2002, производства ООО МРП «Техноаргус», Россия (ФСР 2007/00950) – 1 шт. – предназначен для определения остроты зрения для дали.

13. Щелевая лампа офтальмологическая ручная модели XL-1 в комплекте с принадлежностями, производства "Рексам Ко., Лтд.", Япония (РЗН 2016/4151) – 1 шт. позволяет производить микроскопическую диагностику видимых частей глаза - век, склеры, конъюнктивы, радужки, хрусталика и роговицы.

14. Лампа щелевая офтальмологическая TSL-5000 с принадлежностями, производства "Томэй ГмбХ", Германия (ФСЗ 2011/11147) – 1 шт. позволяет производить микроскопическую диагностику видимых частей глаза - век, склеры, конъюнктивы, радужки, хрусталика и роговицы.

15. Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 по ТУ 9442-001-39589405-2002, производства ООО МРП «Техноаргус», Россия (ФСР 2007/00471) – 1 шт. - для подбора корректирующих очков методом субъективной пробы.

16. Тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный ТГДц-01 "ПРА" по ТУ 9441-011-12191956-98, производства АО "Государственный Рязанский приборный завод", Россия (ФСР 2008/02643) – 1 шт.- измерение внутриглазного давления через верхнее веко.

17. Периметр автоматический офтальмологический AP-3000 с принадлежностями, производства Томэй ГмбХ, Германия (ФСЗ 2011/09934) – 1 шт. – предназначен для определения остроты зрения для дали, астигматизм и направление главных меридианов астигматического глаза.

18. Проектор знаков офтальмологический "ОПТИОНИКС®" (OPTIONIX®) по ТУ 26.60.12-011-37600580-2020 Производство: ЗАО НПО Медкар, Россия (РЗН 2020/10607) – 1 шт. – предназначен для проверки остроты зрения.

19. Анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения компьютеризированный АПЗ-30/50/100-«ПЕРИТЕСТ» по ТУ 9442-002-11432330-2003, производства ИП Гуров Андрей Сергеевич, Россия (ФСР 2012/13976) – 1 шт. – предназначен для определения остроты зрения для дали, астигматизм и направление главных меридианов астигматического глаза.

20. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в сле-

дующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) – 2 шт. - предназначены для сидения одного человека, со спинкой и сиденьем с подлокотниками или без них.

21. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292) - 2 шт. - предназначены для сидения одного человека.

Кабинет «Женское здоровье»:

1. Кресло гинекологическое-урологическое «Клер»-КГЭМ по ТУ 9452-003-43656656-2011, исполнение: КГЭМ-01, производства ООО Научно-производственная фирма "Дентофлекс", Россия (ФСР 2008/03499) – 1 шт. – предназначено для гинекологических, урологических и проктологических осмотров и манипуляций.

2. Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 по ТУ 9452-021-07614107-2004, производства АО "Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия (ФСР 2010/07065) – 1 шт. – предназначено для гинекологических, урологических и проктологических осмотров и манипуляций.

3. Кресло гинекологическое «Грейс» по ТУ 9452-008-74487176-2011, производства ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2011/10927) – 1шт. - предназначено для гинекологических, урологических и проктологических осмотров и манипуляций.

4. Кольпоскоп КС-02 по ТУ 26.70.22-009-52132018-2018, производства ООО "Здоровый Мир", Россия (РЗН 2019/8462) – 1 шт.- дает возможность эффективно и своевременно диагностировать заболевания влагалища, шейки матки, нижней трети цервикального канала, наружных половых органов.

5. Маммограф электроимпедансный компьютерный для скринингового обследования молочной железы "МЭИК"® по ТУ 9442-001-21702999-2013, производства ООО ПКФ "Современная импедансная медицинская техника", Россия (РЗН 2014/2264) – 1 шт. - Диагностика патологических и непатологических изменений тканей молочной железы.

6. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-

«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) – 1 шт. - обеспечивают наивысшую степень дезинфекции в диагностическом кабинете.

7. Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2012/13836) – 1шт. – обеспечивает наивысшую степень защиты в диагностическом кабинете.

8. Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), производства АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836) 1 шт. – предназначен для обеззараживания воздуха

9. Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения Cardiophon, Duplex de luxe, производства "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия (ФСЗ 2012/12207) – 1 шт. - прибор для выслушивания (аускультации) шумов внутренних органов: лёгких, бронхов, сердца, сосудов, кишечника.

10. Стетоскоп Littmann вариант исполнения Littman classic 3 с принадлежностями, производства ЗМ Компани", Россия (РЗН 2016/4622) - 1шт. - прибор для выслушивания (аускультации) шумов внутренних органов: лёгких, бронхов, сердца, сосудов, кишечника.

11. Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 четырех исполнений: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М, исполнение в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2010/07335) – 1 шт. – предназначена для хранения и транспортирования набора лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочного материала и других изделий медицинского назначения, используемых при оказании экстренной помощи.

12. Аппарат ультразвуковой диагностический серии М с принадлежностями, вариант исполнения: М9, производства "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР (РЗН 2017/6115) – 1 шт. - система ультразвуковой диагностики.

13. Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ», производства ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089) – 1

шт. - предназначен для сбора острого инструментария и органических отходов

14. Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный "Ева" по ТУ 9437-045-44942795-2009, производства ООО "Полимерные изделия", Россия (ФСР 2010/07047) – 1 шт. - предназначен для проведения профилактических осмотров.

15. Стетоскоп акушерский деревянный Сад «М-МИЗ» по ТУ 9398-093-07613473-2003, ФСР 2007/00787 от 01.10.2007, производства Можайский МИЗ, Россия (ФСР 2007/00787) – 1 шт. - предназначен для аускультации звуков, исходящих от сердца.

16. Тест-полоски MULTICHECK для определения в моче параметров и веществ (от 1 до 15), производства "АйЭнДи Диагностика Инк.", Канада (ФСЗ 2010/07039) – 1 шт. - предназначен для определения в моче параметров веществ.

17. Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С, производства АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585) – 1 шт. - предназначен для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий.

18. Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в следующих исполнениях: - КДС-1; - КДС-3; - КДС-5; - КДС-6; - КДС-6Л-1К; - КДС-6Л-2К; - КДС-10; - КДС-11; - КДС-20; - КДС-30; - КДС-35; - КДС-0,1; - КДС-0,2, исполнение КДС-3, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2009/06144) – 1 шт. - предназначен для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий

19. Набор изделий для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет НРСР-01-"Мединт-М" по ТУ 9437-010-18585567-2004, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (РЗН 2014/1928) – 1 шт. - предназначен для оказания реанимационной помощи взрослым и детям от 6 лет

20. Набор изделий фельдшерский для скорой медицинской помощи НФСМП-"Мединт-М" по ТУ 9398-006-18585567-2003, производства ООО "МЕДПЛАНТ", Россия (ФСР 2008/02305) – 1 шт. - предназначен для оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе

21. Набор для минитрахеостомии, производства "Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед" (ФСЗ № 2009/05211) – 1 шт. - предназначен для аспирации дыхательных путей.

22. Термометр медицинский электронный OMRON Eсо Temp (MC-203-E), производства OMRON HEALTHCARE Co., Ltd, Япония – 1 шт. - предназначен для измерения артери-

ального давления.

23. Кресло донорское с управляемым наклоном и штативом КДн-«Диаконс» для размещения донора при взятии крови (угол наклона спинки от 20 до 30 градусов) по ТУ 9452-049-17099103-2002, производства ООО "Диаконс" Россия, (ФСР 2012/13320) - 1 шт. - предназначено для гинекологических, урологических и проктологических осмотров и манипуляций.

24. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) – 2 шт. - предназначены для сидения одного человека, со спинкой и сиденьем с подлокотниками или без них.

25. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292) - 2 шт. - предназначены для сидения одного человека.

Кабинет «Стоматология»:

1. Ванны ультразвуковые электромеханические однокамерные для дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских инструментов "УльтраЭст" по ТУ 9451-008-56755207-2009, модель: "УльтраЭст-М" УВ-3, производства ЗАО "Геософт Дент", Россия (ФСР 2007/00048) – 1 шт. - ультразвуковая ванна для предстерилизационной очистки и дезинфекции среднего и мелкого инструментария в диагностическом кабинете.

2. Стерилизатор мелких стоматологических инструментов электрический со стеклянными шариками СС-01 "ТермоЭст" по ТУ 9451-001-56755207-2005, модель: - "Термоэст", производства ЗАО "Геософт Дент", Россия (ФСР 2010/08560) – 1 шт. – предназначен для стерилизации инструментов.

3. Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С, производства АО "Елатомский приборный завод", Россия (РЗН 2016/3585) – 1 шт. – предназначен для стерилизации инструментов.

4. Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-3, КФ-6, КФ-9, КФ-12, КФ-

18, по ТУ 9451-018-07614107-2002 и сменные части: фильтры, исполнение: КФ-3, Производство: АО "Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия (ФСР 2010/07067) – предназначен для стерилизации инструментов.

5. Компрессор воздушный поршневой стоматологический КС-60-01 "Стомэл" по ТУ 9452-003-26502549-00, производства ООО "СТОМЭЛ-К", Россия (ФСР 2009/05060) – 1 шт. служит в качестве источника чистого безмасляного сжатого воздуха для дыхательного оборудования.

6. Установка стоматологическая STOMADENT HARMONY с принадлежностями, производства "СТОМАДЕНТ СК с.р.о.", Словакия (ФСЗ 2008/02141) – 1 шт. это комплекс электрических, механических и гидравлических элементов, преобразующий внешнюю энергию в энергию стоматологических инструментов и предназначенный для обеспечения необходимых условий проведения стоматологической диагностики

7. Установка стоматологическая STOMADENT IMPULS с принадлежностями, производства «СТОМАДЕНТ СК с.р.о», Словакия. (ФСЗ 2008/02142) -1 шт. - это комплекс электрических, механических и гидравлических элементов, преобразующий внешнюю энергию в энергию стоматологических инструментов и предназначенный для обеспечения необходимых условий проведения стоматологической диагностики.

8. Датчик цифровой дентальный интраоральный RIOSensor модель Ris500, производства "Рэй Ко., Лтд.", Корея (РЗН 2018/7470) – 1 шт. – предназначен для получения цифрового интраорального рентгеновского изображения в диагностических целях.

9. Аппарат рентгеновский стоматологический Evolution X3000 2C/1 с принадлежностями, производства "Нью Лайф Радиолоджи С.р.Л", Италия (ФСЗ 2008/02002) – 1 шт. – аппарат предназначен для прицельных рентгеновских стоматологических снимков.

10. Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных медицинских инструментов-"СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010, исполнение: "СПДС-3-К", производства ООО "СПДС", Россия (ФСР 2010/09347) – 1 шт. – предназначен для хранения стерильных инструментов.

11. Аппарат рентгеновский дентальный MAX 70 HF/DC с принадлежностями, производства "ЦСН Индастри С.р.л.", Италия (РЗН 2017/5415) – 1 шт. - аппарат представляет собой диагностическое оборудование, которое дает возможность обследовать зубы, десна и кости челюсти посредством прохождения через них рентгеновских лучей.

12. Визиограф стоматологический Rx 2 с принадлежностями, производство "ЦСН Индастри С.р.л.", Италия (РЗН 2017/5414) – 1 шт. - - предназначен для работы совместно с рентгеновскими аппаратами и выполнения рентгеновских снимков полости рта.

13. Аппараты для локализации апикального сужения корневого канала зуба по ТУ 9452-005-56755207-2016, вариант исполнения: «ЭндоЭст-3Д», производства ЗАО "Геософт Дент", Россия (ФСР 2007/00078) – 1 шт. - – предназначен для определения рабочей длины корневого канала зуба.

14. Установка предстерилизационной очистки и смазки стоматологических нако-
нечников: Assistina 301 Plus, с принадлежностями, производства "Ви унд Ха Дентал Верк
Бюрмоос ГмбХ", Австрия (РЗН 2017/5826) – 1 шт. - предназначена для предстерилизацион-
ной очистки от различных загрязнений.

15. Стерилизатор воздушный медицинский в вариантах исполнения ГП-10 СПУ, ГП-
20 СПУ по ТУ 9451-013-00141798-2005, исполнение: ГП-20 СПУ, производства ОАО "Смолен-
ское СКТБ СПУ", Россия (ФСР 2010/07332) – 1 шт. – предназначен для стерилизации инстру-
ментов.

16. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-
3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-
«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»,
производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) – 1 шт. - обеспечивают наивысшую
степень дезинфекции в стоматологическом кабинете

17. Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-
2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-
400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель:
ХФ-140 "ПОЗИС" 1шт. - Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реа-
гентов.

18. Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-
«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР
2012/13836) – 1шт. – обеспечивает наивысшую степень защиты в диагностическом кабинете.

19. Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в
следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-
2 "ПОЗИС" ("POZIS"), производства АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836) -1шт.- предназ-
начен для обеззараживания воздуха

20. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в сле-
дующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский
лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача
СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для вра-

ча СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) – 2 шт. - предназначены для сидения одного человека, со спинкой и сиденьем с подлокотниками или без них.

21. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292) -2 шт. - предназначены для сидения одного человека.

Кабинет «Лаборатория»:

1. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) – 1 шт. - обеспечивают наивысшую степень дезинфекции в лабораторном кабинете

2. Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2012/13836) – 1шт. – обеспечивает наивысшую степень защиты в диагностическом кабинете.

3. Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), производства АО "ПОЗис", Россия (ФСР 2012/13836) -1шт.- предназначен для обеззараживания воздуха

4. Контейнеры полимерные с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 в следующих исполнениях: - КДС-1; - КДС-3; - КДС-5; - КДС-6; - КДС-6Л-1К; - КДС-6Л-2К; - КДС-10; - КДС-11; - КДС-20; - КДС-30; - КДС-35; - КДС-0,1; - КДС-0,2, исполнение КДС-1, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2009/06144) – 1 шт. – предназначен для стерилизации инструментов.

5. Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» по ТУ 9452-037-11769436-2010, производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/10034) – 1 шт. - предназначен для размещения в нем пробирок.

6. Емкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-С по ТУ 9451-010-24320270-2014, вариант исполнения: ЕДПО-1С, производства АО "Елатомский приборный

завод", Россия (РЗН 2016/3585)) – 1 шт. - предназначен для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий

7. Анализатор крови биохимический портативный, модели: CardioChek, CardioChek PA, с принадлежностями, модель: CardioChek PA, производства "Полимер Технологии Системс, Инк.", США (РЗН 2015/2693) – 1 шт. - предназначен для количественного исследования клеток крови.

8. Анализаторы биохимические "ТОРУС" по ТУ 9443-013-74487176-2007, производства ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2007/00674) – 1шт. - предназначен для количественного исследования клеток крови.

9. Анализаторы гематологические автоматические "ГЕМАЛАЙТ" по ТУ 9443-011-74487176-2007, производства ООО "ДИКСИОН", Россия (ФСР 2007/00675) – 1шт. - предназначен для исследования крови.

10. Экспресс-анализатор параметров крови портативный, варианты исполнения: blueCare, multiCare-in, с принадлежностями, исполнение multiCare-in, производства Биохемикал Системз Интернэйшнл Срл, Италия (ФСЗ 2011/10072) – 1 шт. - предназначен для количественного исследования клеток крови.

11. Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active) с принадлежностями, производства "Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Германия (ФСЗ 2007/00817)) – 1 шт. - предназначен для определения уровня сахара в крови

12. Анализаторы мочи CL-50 Plus, CL-500 с принадлежностями, модель: CL-50 Plus, производства "Хай Текнолоджи, Инк.", США (РЗН 2016/3986) – 1 шт. – предназначен для измерения до 14 параметров мочи.

13. Пробирки для взятия крови "Проба", вариант исполнения: Пробирки с активатором свертывания, производства «Ченгду Рич Сайенс Индастри Ко., Лтд.», Китай (ФСЗ 2010/06301) – 1 к-т. – взятие и хранение крови пациента

14. Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями, вариант исполнения: MicroCC-20Plus, производства "Хай Текнолоджи, Инк.", США (ФСЗ 2010/07756) – 1 шт. - предназначен для количественного исследования клеток крови.

15. Центрифуга лабораторная медицинская настольная "Armed" производства "Зенит Лаб (Цзянсу) Ко., Лтд.", Китай (РЗН 2020/10939) – 1 шт. - это лабораторный прибор, который применяют для разделения биологических жидкостей на их составные части.

16. Анализатор осадка мочи автоматический UriSed mini (УриСед мини) Производ-

ство: 77 Электроника Кфт, Венгрия (РЗН 2019/9342) – 1 шт. – предназначен для цитометрии на основе цифровой микроскопии.

17. Анализатор гематологический V-Counter (В-Каунтер) с принадлежностями
Производство: Вест Медика Продукционс- унд Хайдельс-ГмбХ, Австрия (РЗН 2017/5740) – 1 шт. – предназначен для клинического анализа крови.

18. Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) CUBE 30 Touch (КУБ 30 ТАЧ), с принадлежностями
Производство: «Диессе Диагностика Сенезе С.п.А.», Италия (РЗН 2019/9149) – 1 шт. – предназначен для автоматического анализа скорости оседания эритроцитов (СОЭ).

19. Стерилизаторы воздушные ГП-5 МО, ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80 МО по ТУ 9451-026-41457390-2011, модель: ГП-10 МО, производства АО "Государственный Рязанский приборный завод", Россия (ФСР 2011/10267) – 1 шт. – предназначен для стерилизации инструментов.

20. Ёмкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовые - «РЕСПЕКТ» по ТУ 9398-002-13014251-2012, исполнение: Ёмкость-контейнер для сбора острого инструментария и органических отходов класса Б и В, одноразовая 1,5 л. -«РЕСПЕКТ», производства ООО "ГК "Респект", Россия (РЗН 2013/1089) – 1 шт. - предназначен для сбора острого инструментария и органических отходов.

21. Холодильники фармацевтические ХФ-250 "ПОЗИС", ХФ-250-1 "ПОЗИС", ХФ-250-2 "ПОЗИС", ХФ-250-3 "ПОЗИС", ХФ-400 "ПОЗИС", ХФ-400-1 "ПОЗИС", ХФ-400-2 "ПОЗИС", ХФ-400-3 "ПОЗИС", ХФ-140 "ПОЗИС", ХФ-140-1 "ПОЗИС" по ТУ 9452-168-07503307-2004, модель: ХФ-140 "ПОЗИС" - Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов.

22. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) – 2 шт. - предназначены для для сидения одного человека, со спинкой и сиденьем с подлокотниками или без них.

23. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия (РЗН

2013/1292) -2 шт. - предназначены для сидения одного человека.

Кабинет «Маммография»:

1. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) – 1 шт. - обеспечивают наивысшую степень дезинфекции в маммографическом кабинете.
2. Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2012/13836) – 1шт. – обеспечивает наивысшую степень защиты в диагностическом кабинете.
3. Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), производства АО "ПОЗИС", Россия (ФСР 2012/13836) – 1 шт. - предназначен для обеззараживания воздуха.
4. Комплекс рентгеновский маммографический цифровой МАДИС по ТУ У 33.1-14309534-118-2003, с принадлежностями, производства Фирма "Радмир" ДП АО НИИРИ, Украина (РЗН 2014/2046) – 1 шт. - специализированный рентгенодиагностический аппарат, используемый для снимков молочной железы.
5. Маммограф рентгеновский «Маммо-4-«МТ» по ТУ 9442-036-47245915-2011 с принадлежностями, производства ЗАО "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд", Россия (ФСР 2008/02328) – 1 шт. - специализированный рентгенодиагностический аппарат, используемый для снимков молочной железы.
6. Маммограф рентгеновский «Маммо-4МТ-Плюс» по ТУ 9442-052-47245915-2016 производство: ЗАО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия (РЗН 2017/5930) – 1 шт. - специализированный рентгенодиагностический аппарат, используемый для снимков молочной железы.
7. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производ-

ства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) – 2 шт. - предназначены для сидения одного человека, со спинкой и сиденьем с подлокотниками или без них.

8. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292) - 2 шт. - предназначены для сидения одного человека.

Кабинет «Рентгенодиагностика»:

1. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006 в двух исполнениях: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ», исполнение настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», производства АО "КРОНТ-М", Россия (ФСР 2011/11388) – 1 шт. - обеспечивают наивысшую степень дезинфекции в рентгенодиагностическом кабинете.

2. Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, производства АО «КРОНТ-М», Россия (ФСР 2012/13836) – 1 шт. – обеспечивает наивысшую степень защиты в диагностическом кабинете.

3. Рециркуляторы бактерицидные компактные по ТУ 9451-204-07503307-2012 в следующих исполнениях: РБК-1 "ПОЗИС" ("POZIS"), РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), исполнение РБК-2 "ПОЗИС" ("POZIS"), производства АО "ПОЗис", Россия (ФСР 2012/13836) – 1 шт. - предназначен для обеззараживания воздуха.

4. Флюорограф цифровой малодозовый "ФЦМ-Альфа" по ТУ 9442-022-17459079-2009, исполнение: "ФЦМ-Альфа 2К", производства ЗАО "Приборы и оборудование для научных исследований", Россия (ФСР 2009/05372) – 1 шт. - – предназначен для исследования грудной клетки человека.

5. Аппарат рентгеновский палатный передвижной «МобиРен-4МТ-А» по ТУ 9442-054-47245915-2016, исполнение: «МобиРен-4МТ-А»-02, производства Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд", Россия (РЗН 2017/6074) – 1 шт. – предназначен для массовых профилактических исследований с использованием рентгеновского излучения.

6. Аппарат рентгеновский цифровой палатный передвижной «Р-500 «Мобикомпакт» по ТУ 9442-053-47245915-2016 Производство: Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд", Россия (РЗН 2017/6289) – 1 шт. – предназначен для массовых профилактических исследований с использованием рентгеновского излучения.

7. Ширма рентгенозащитная цельнометаллическая свинцовая по ТУ 9452-009-17459079-2002, исполнение: ШРБ1-"ПОНИ", производства ЗАО "ПОНИ", Россия (ФСР

2011/11811) – 1 шт. – предназначена для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований.

8. Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-"РЕНЕКС" по ТУ 9398-010-21009821-2004 Производство: ЗАО "РЕНЕКС", Россия (ФСР 2008/03184) – 6 шт. - предназначена для обеспечения защиты медицинского персонала и пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований.

9. Стулья медицинские марки «КМ-Магма» по ТУ 9452-008-32494920-2008 в следующих исполнениях: - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ; - стул медицинский стационарный СМС; - стул медицинский для врача СМВ; - стул медицинский секционный СМС; - стул медицинский стоматологический для врача СМСв; - стул медицинский стоматологический для ассистента СМСа, исполнения - стул медицинский лабораторный СМ; - стул-табурет медицинский лабораторный СМТ, производства ООО научно-производственная фирма Костромская медтехника, Россия (ФСР 2008/03973) – 2 шт. - предназначены для для сидения одного человека, со спинкой и сиденьем с подлокотниками или без них.

10. Столы медицинские массажные Heliox с электроприводом, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями, производства ООО "Гелиокс", Россия (РЗН 2013/1292) -2 шт. - предназначены для сидения одного человека.

III. Транспортное средство:

1. АМС-49415Н, производства ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия – 1 шт. – Базовое транспортное средство с изотермическим фургоном, в котором размещаются кабинеты.

2. ПМК-48415Н, производства ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия – 1 шт. – Базовое транспортное средство с изотермическим фургоном, в котором размещаются кабинеты.

3. ПМК-48415К, производства ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия – 1 шт. – Базовое транспортное средство с изотермическим фургоном, в котором размещаются кабинеты.

4. 972200, производства ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия – 1 шт. - Базовое транспортное средство с изотермическим фургоном, в котором размещаются кабинеты.

5. АЛ-59860С-2, производства ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия – 1 шт. - Базовое транспортное средство с изотермическим фургоном, в котором размещаются кабинеты.
6. АФ-47434А, производства ООО «ТТМ ЦЕНТР», Россия – 1 шт. - Базовое транспортное средство с изотермическим фургоном, в котором размещаются кабинеты.
7. АФ-371703, производства ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Россия – 1 шт. - Базовое транспортное средство с изотермическим фургоном, в котором размещаются кабинеты.
8. VFM6АО, производства ООО «РусКомТранс», Россия – 1 шт. - Базовое транспортное средство с изотермическим фургоном, в котором размещаются кабинеты.
9. 878913, производства ООО «Форвард», Россия – 1 шт. - Базовое транспортное средство с изотермическим фургоном, в котором размещаются кабинеты.
10. 185514, производства ООО «Форвард», Россия – 1 шт. - Базовое транспортное средство с изотермическим фургоном, в котором размещаются кабинеты.
11. 692732, производства ООО «КОМЗ», Россия – 1 шт. - Базовое транспортное средство с изотермическим фургоном, в котором размещаются кабинеты.
12. 385527, производства ООО «Форвард», Россия – 1 шт. - Базовое транспортное средство с изотермическим фургоном, в котором размещаются кабинеты.

IV. Специальное оборудование:

1. Независимый воздушный и жидкостный отопитель Air Top EVO 55, производства «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия – 2 шт. – предназначен для отопления Изотермического фургона
2. Воздушный отопитель AER D5, производство: «A100», Китай – 2 шт. – предназначен для отопления Изотермического фургона
3. Воздушный отопитель модели: Airtronic D4, производства Eberspacher Climat Control Systems GmbH & Co. KG., Германия – 2 шт. предназначен для отопления Изотермического фургона
4. Промышленная воздушная завеса, модель: МЗ, производства ООО «ТРОПИК ЛАЙН», Россия – не более 2 шт.- предназначена для отопления Изотермического фургона КФИ
5. Воздушная завеса Арктос Мини-3, производства ООО «Арктос», Россия – 1шт. – предназначена для уменьшения потери тепла
6. Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMB, производства “MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO.PTE.LTD.”, Сингапур – 2 шт. - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях

7. Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель MSMAAU-07HRDN1 / MOBA03-07HFN1, Производство: Midea Group, Китай - 2 шт. - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях

8. Установка для кондиционирования воздуха «сплит-системы», внешние и внутренние блоки кондиционеров, с маркировкой Midea, модель M30G-21HFN8-Q, производство: Midea Group, Китай - 2 шт. - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях

9. Сплит-система т.м. «Dometic», производства "Dometic Italy S.p.a.", Италия – 1 шт. - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях

10. Мульти-сплит система Royal Clima 3RGR-24HN/OUT + 3 Производство: «Royal Clima», Китай - 2 шт. - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях

11. Мульти-сплит система Haier 3U19FS1ERA(N), производство: «Haier» Китай - 2 шт. - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях

12. Мульти-сплит система HAIER 4U75S2SR5FA, производство: «Haier» Китай - 2 шт. - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях

13. Мульти-сплит система HISENSE AMW4-28U4SAC, производство: «Hisense» Китай - 2 шт. - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях

14. Мульти-сплит система HISENSE AMW2-14U4SRE, производство: «Hisense» Китай - 2 шт. - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях

15. Мульти-сплит система Royal Clima 3RFM-14HN, производство: «Royal Clima», Китай - 2 шт. - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях

16. Мульти-сплит система HAIER 2U40S2SM1FA, производство: «Haier» Китай - 2 шт. - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях

17. Мульти сплит-система, Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER1*3 / MXZ-3HJ50VA ER1, производство: Mitsubishi Electric Corporation, Тайланд - 2 шт. - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях

18. Накрышный кондиционер Webasto cool top trail, производства «Webasto Thermo & Comfort SE», Германия – 1шт. - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях.

19. Электрический кондиционер Autoclima, производства AUTOCLIMA, Италия –

1шт. - устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях.

20. Электрические аппараты бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: сплит-системы, серия (тип): GC, универсальные блоки, серии (тип) GU производства «General Climate LTD», Китай – 1 шт. – предназначены для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях.

21. Система кондиционирования Mitsubishi Electric в составе наружный блок MXZ + Внутренний блок MSZ производства Mitsubishi Electric Corporation, Япония – не более 2шт. - предназначены для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях.

22. Электрогенераторная установка с маркировкой «ELEMACH», модели: SH6500EX-R, SH11000-R, SH7600EX, производства «SAWAFUJI ELECTRIC Co., LTD», Япония – 1 шт. - Это агрегат, преобразующий в конечном итоге энергию топлива в электрическую.

23. Дизель-генератор, т.м. «Kubota», модель: J116, производства «Kubota Corporation», Япония – 1 шт. - Это агрегат, преобразующий в конечном итоге энергию топлива в электрическую.

24. Дизельный генератор «TOYO», модель TKV-20SPC, производство: «TOYO DENKI INDUSTRIAL CO.,LTD» Япония– 1 шт. - Это агрегат, преобразующий в конечном итоге энергию топлива в электрическую.

25. Генератор бензиновый инверторный ЗИГ-3500 производства ЗАО “Зубр ОВК”, Россия – 1шт. - Это агрегат, преобразующий в конечном итоге энергию топлива в электрическую.

26. Генератор Fubag TI 4300, производства “Fubag”, Германия – 1шт. - Это агрегат, преобразующий в конечном итоге энергию топлива в электрическую..

27. Бензиновый генератор Denzel GT-2600i (2300 Вт), производства “MATRIZE Handels GmbH”, Германия. – 1 шт. – Это агрегат, преобразующий в конечном итоге энергию топлива в электрическую.

28. Бензиновый генератор «Energo», Модели: EB7.0/230-YLE, EB7.0/230-HLE, EB 14.0/230-YLE, производство: «Energo» Россия– 1 шт. - Это агрегат, преобразующий в конечном итоге энергию топлива в электрическую.

29. Бензиновый генератор Briggs&Stratton модель: Elite 8500EA, производство: «Briggs & Stratton» США – 1 шт. Это агрегат, преобразующий в конечном итоге энергию топлива в электрическую.

30. Бензиновый генератор Yamaha Модель: EF 7200 E, производство: «Yamaha», Китай, Япония– 1 шт. Это агрегат, преобразующий в конечном итоге энергию топлива в электрическую.

31. Бензиновый генератор ZONGSHEN модели: PB 7000 E, KB 7000 E, KB 9000 E, PB 12000E, PB 15000 E, производитель: «ZONGSHEN INDUSTRIAL GROUP CO., LTD», Китай– 1 шт. Это агрегат, преобразующий в конечном итоге энергию топлива в электрическую.

32. Обогреватель электрический бытовой конвекционного типа, т.м. «Noirot», модель Spot E-4, производства «Noirot S.A.S.», Франция – не более 8 шт. – предназначен для отопления помещений.

33. Электрический конвектор «Kalashnikov» модели: KVCH-E10E-11, KVCH-E10M-11 Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия – не более 8 шт. - предназначен для отопления помещений.

34. Электрический конвектор «Ballu», модели: BEC/EVE-1000, Enzo BEC/EZER-1000, Ettore BEC/ETER-1000, BEC/SEM-1000, BEC/HMM1000 Производство: ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия не более 8 шт. - предназначен для отопления помещений.

35. Электрооборудование для обогрева помещений: тепловая завеса электрическая стационарная, т.м. «Ballu», модель BHC-L08-T03, BHC-L05S02-S, производства ООО «Ижевский завод тепловой техники», Россия – не более 2 шт. - предназначена для отопления Изотермического фургона

36. Прибор приемно-контрольный охранный, модель Кварц вариант 2, производства ООО НПО «Сибирский Арсенал», Россия – 1 шт. – пожарная сигнализация.

37. Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный «Версет», модели: ВС-ПК ВЕКТОР-116, ВС-ПК ВЕКТОР-120 Производство: ООО «Версет», Россия – 1 шт. – пожарная сигнализация

38. Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12000Н/1-Ц Производство: «Ресанта», Китай – 1 шт. – стабилизация напряжения

39. Многофункциональный автономный преобразователь энергии МАП SINE, модель PRO, производства ООО «МикроАрт», Россия – 1 шт. - электротехническое устройство, преобразующее электрическую энергию с одними значениями параметров и/или показателей качества в электрическую энергию с другими значениями параметров

40. Установка вентиляционная, модель Breezart, производства ООО «КЛИМАТСОФТ», Россия – 1 шт. - это воедино собранное оборудование, которое обеспечивает обслуживаемое помещение вентиляцией (необходимый воздухообмен в помещении).

41. Вентилятор промышленный, модель VANVENT, производства ООО «ВАНВЕНТ», Россия – 1 шт. - используются для перемещения воздуха.

42. Окно рентгенозащитное «TISSA» ТУ ВУ 600091320/003-2006, производство ООО

«ТИССА», Республика Беларусь –1шт. – предназначено для визуального наблюдения врачом за пациентом при проведении процедур и защиты от ионизирующего излучения.

43. Биотуалет Thetford Porta Potti, производства "Thetford", Нидерланды – 1шт. - предназначен для отправления естественных нужд.

44. Холодильник BBK, RF-068 Производство: BBK Electronics LTD, КНР– 1шт. - предназначен для хранения изделий с температурным режимом.

The floor plan shows a large rectangular building with a total width of 8000 and a total depth of 2550. The layout is divided into several sections and rooms:

- Top Left:** A large rectangular area labeled "Отсек №1,2" with dimensions 1140 (width) and 800 (depth). It contains sub-sections 1.1, 1.2, 2.1, and 2.2. Below this is a smaller area with dimensions 1040 and 600, containing sub-sections 3.1, 3.2, and 3.3.
- Top Center:** A long horizontal corridor or area with a width of 1850 and a depth of 600. Below this is a room labeled "Отсек №4" with a width of 1800 and a depth of 600. It contains sub-section 4.1 and two green rectangular areas.
- Top Right:** A room labeled "Отсек №6" with a width of 2510 and a depth of 600. It contains sub-section 6.2 and a cluster of white shapes labeled 6.1. To the right of this is a room labeled "Отсек №7" with a width of 2250 and a depth of 600. It contains sub-section 7.2 and a large white rectangular area labeled 7.1.
- Bottom Left:** A room labeled "Отсек №3" with a width of 1140 and a depth of 600. It contains sub-sections 3.1, 3.2, and 3.3. Below this is a room labeled "Отсек №5" with a width of 4400 and a depth of 600. It contains sub-section 5.1 and a large white rectangular area.
- Bottom Center:** A long horizontal corridor or area with a width of 4400 and a depth of 600. It contains sub-section 5.1 and a large white rectangular area.
- Bottom Right:** A room labeled "Отсек №5" with a width of 4400 and a depth of 600. It contains sub-section 5.1 and a large white rectangular area.

Dimensions are provided for various sections and the overall building. The overall width is 8000 and the overall depth is 2550. Specific room dimensions include 1140x800, 1850x600, 2510x600, 2250x600, 1800x600, 1140x600, 4400x600, and 4140x600. Sub-sections are labeled with numbers in red boxes: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2. Rooms are labeled "Отсек №1,2", "Отсек №3", "Отсек №4", "Отсек №5", "Отсек №6", and "Отсек №7". The text "Всп=800" is written at the bottom center.

-  - обогреватели электрические конвекционные;
-  - облучатели-рециркуляторы воздуха;
-  - внутренние блоки кондиционеров;

- 1.1 - электрогенераторная установка;
- 1.2 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;
- 2.1 - внешний блок кондиционера;
- 3.1 - воздушный отопитель;
- 3.2 - установка вентиляционная;
- 3.3 - вентилятор промышленный;
- 4.1 - весы напольные медицинские электронные и ростомер;
- 5.1 - промышленная воздушная завеса;
- 6.1 - кресло гинекологическое;
- 6.2 - кольпоскоп;
- 7.1 - флюорограф;
- 7.2 - ширма рентгенозащитная.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Диспансеризация» на базе транспортного средства ПМК-48415Н, Рисунок 3.1.1



Рисунок Г.2.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

1.1 - электрогенераторная установка;

1.2 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;

2.1 - внешний блок кондиционера;

3.1 - воздушный отопитель;

3.2 - установка вентиляционная;

3.3 - вентилятор промышленный;

4.1 - весы напольные медицинские электронные и ростомер;

5.1 - промышленная воздушная завеса;

6.1 - кресло гинекологическое;

6.2 - кольпоскоп;

7.1 - флюорограф;

7.2 - маммограф.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Профосмотр» на базе транспортного средства 972200 планировка 1, Рисунок 3.2.

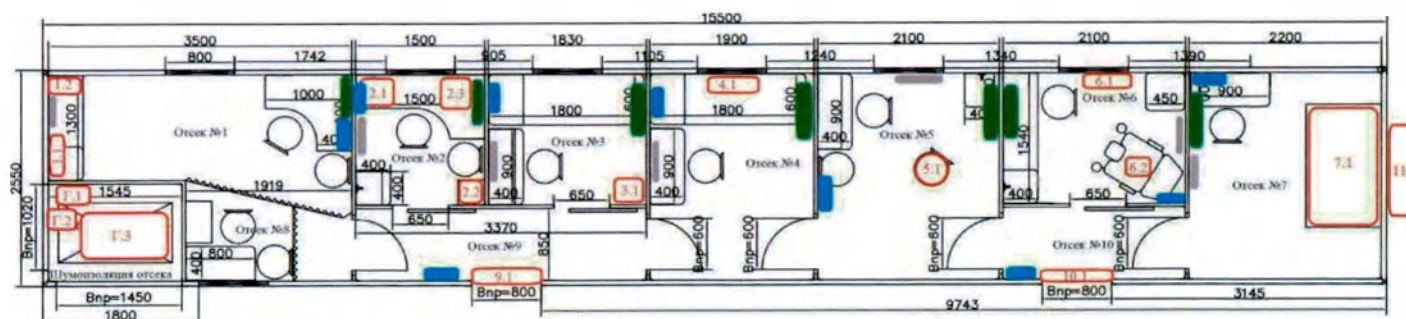


Рисунок 3.2.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

Г.1 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;

Г.2 - вентилятор промышленный;

Г.3 - электрогенераторная установка;

1.1 - осветитель таблиц;

1.2 - прибор приемно-контрольный охранный;

2.1 - гематологический анализатор;

2.2 - стерилизатор воздушный;

2.3 - холодильник;

3.1 - аппарат ультразвуковой диагностический;

4.1 - воздушный отопитель;

5.1 - кресло Барани;

6.1 - кольпоскоп;

6.2 - кресло гинекологическое;

7.1 - аппарат рентгеновский;

9.1, 10.1 - промышленная воздушная завеса;

11 - внешний блок кондиционера.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Про-фосмотр» на базе транспортного средства 972200 планировка 2, Рисунок 3.3

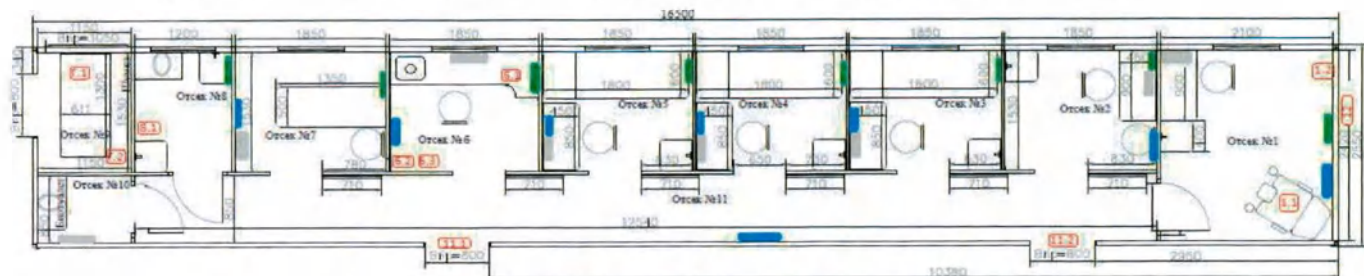


Рисунок 3.3.

■ обогреватели электрические конвекционные;

■ облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ внутренние блоки кондиционеров;

Г.1 - электрогенераторная установка;

Г.2 - вентилятор промышленный;

1.1 - кресло гинекологическое;

1.2 - кольпоскоп;

6.1 - гематологический анализатор;

6.2 - холодильник; 6.3 - стерилизатор воздушный;

8.1 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;

11.1, 11.2 - промышленная воздушная завеса;

12 - внешний блок кондиционера.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Про-фосмотр» на базе транспортного средства 972200 планировка 3, Рисунок 3.4.

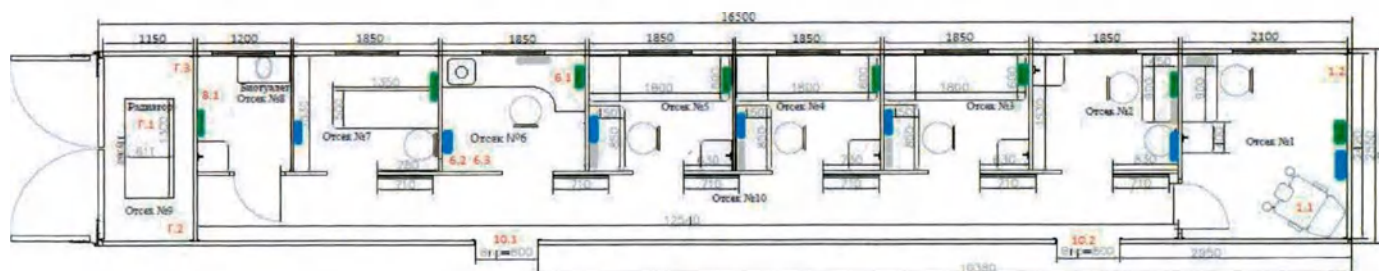


Рисунок 3.4.

■ обогреватели электрические конвекционные;

■ облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ внутренние блоки кондиционеров;

Г.1 - электрогенераторная установка;

Г.2 - установка вентиляционная;

Г.3 - внешний блок кондиционера;

1.1 - кресло гинекологическое;

1.2 - кольпоскоп;

6.1 - гематологический анализатор;

6.2 - холодильник; 6.3 - стерилизатор воздушный;

8.1 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;

10.1, 10.2 - промышленная воздушная завеса;

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Лучевая диагностика» на базе транспортного средства АЛ-59860С-2 Рисунок 3.5.

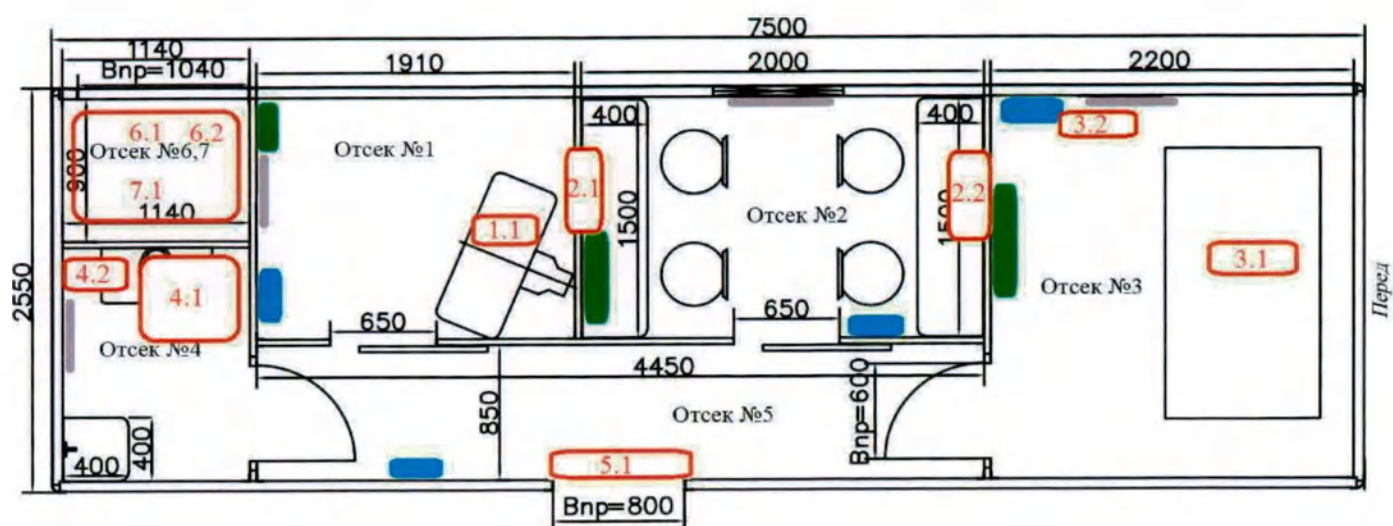


Рисунок 3.5.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

1.1 - маммограф;

2.1 - окно рентгенозащитное;

2.2 - окно рентгенозащитное;

3.1 - флюорограф;

3.2 - воздушный отопитель;

4.1 - установка вентиляционная;

4.2 - вентилятор промышленный;

5.1 - промышленная воздушная завеса;

6.1 - электрогенераторная установка;

6.2 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;

7.1 - внешний блок кондиционера.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Стоматология» на базе транспортного средства АФ-47434А, Рисунок 3.6

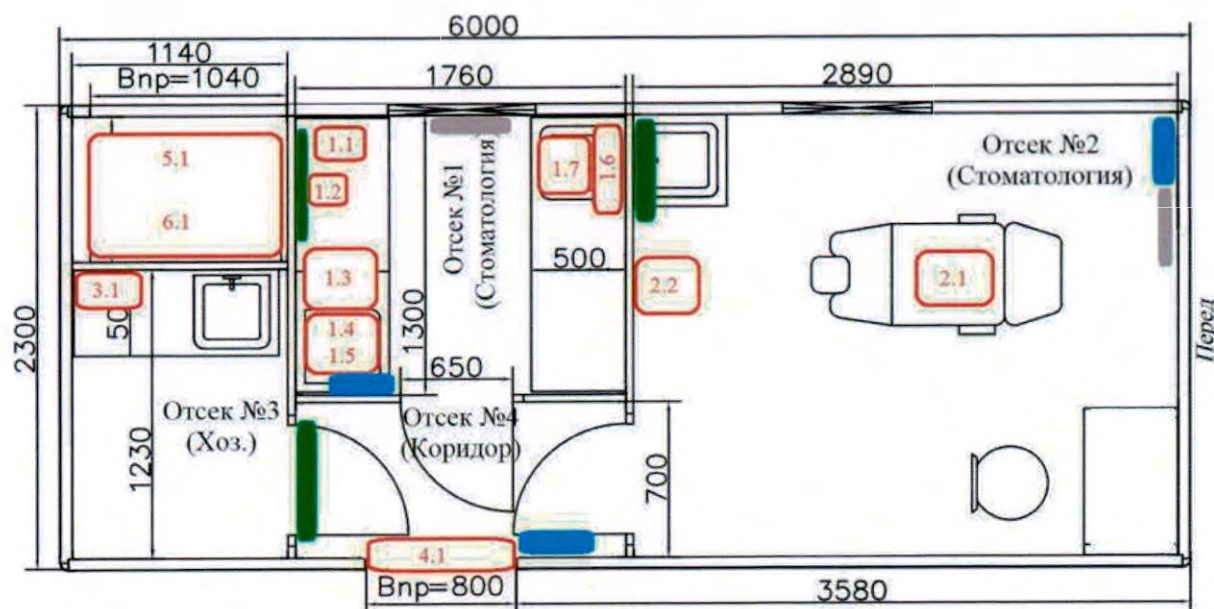


Рисунок 3.6.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

1.1 - камера бактерицидная для хранения инструментов;

1.2 - прибор приемно-контрольный охраннй;

1.3 - холодильник;

1.4 - стерилизатор воздушный;

1.5 - многофункциональный автономный преобразователь энергии

1.6 - воздушный отопитель;

1.7 - компрессор стоматологический;

2.1 - установка стоматологическая;

2.2 - аппарат рентгеновский дентальный;

3.1 - вентилятор промышленный;

4.1 - промышленная воздушная завеса;

5.1 - электрогенераторная установка;

6.1 - внешний блок кондиционера.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Офтальмология» на базе транспортного средства АФ-371703, Рисунок 3.7

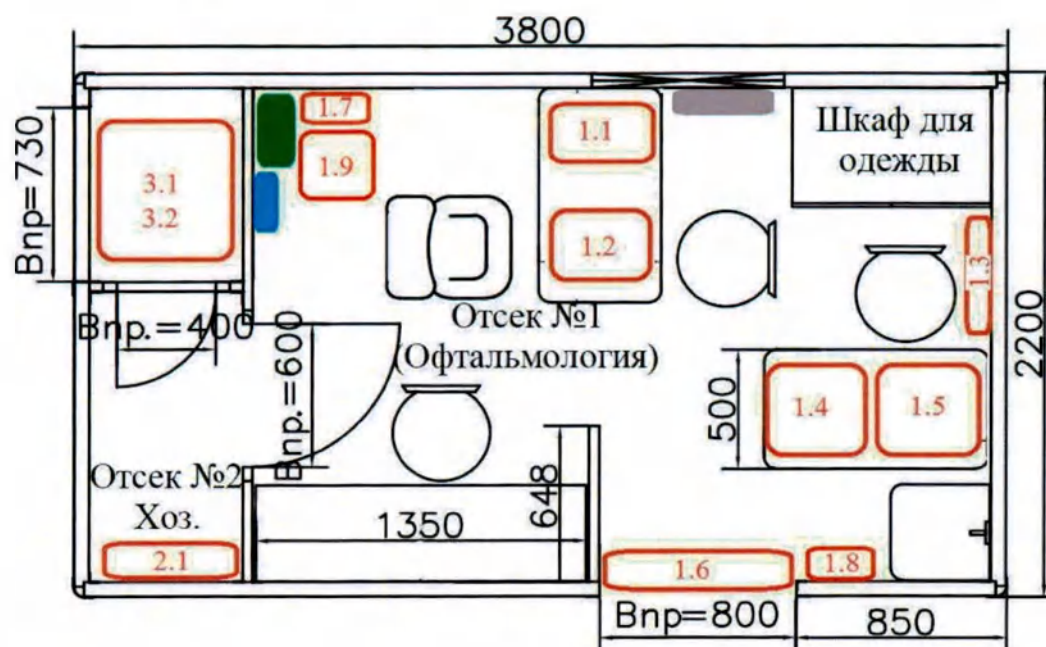


Рисунок 3.7.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

1.1 - лампа щелевая офтальмологическая;

1.2 - авторефкератометр;

1.3 - проектор знаков экранный;

1.4 - бесконтактный тонометр;

1.5 - периметр автоматический;

1.6 - промышленная воздушная завеса;

1.7 - прибор приемно-контрольный охранный;

1.8 - вентилятор промышленный;

1.9 - сплит-система;

2.1 - воздушный отопитель;

3.1 - электрогенераторная установка;

3.2 - многофункциональный автономный преобразователь энергии.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе
«Офтальмология» на базе транспортного средства АФ-371703, Рисунок 3.8

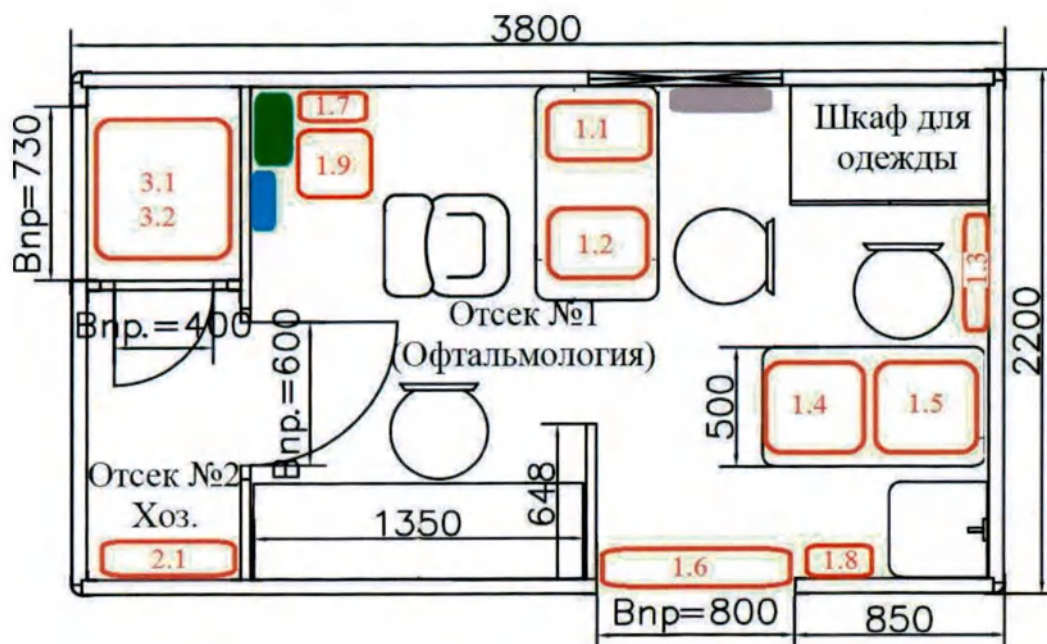


Рисунок 3.8.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

1.1 - лампа щелевая офтальмологическая;

1.2 - авторефкератометр;

1.3 - проектор знаков экранный;

1.4 - бесконтактный тонометр;

1.5 - периметр автоматический;

1.6 - промышленная воздушная завеса;

1.7 - прибор приемно-контрольный охранный;

1.8 - вентилятор промышленный;

1.9 - сплит-система;

2.1 - воздушный отопитель;

3.1 - электрогенераторная установка;

3.2 - многофункциональный автономный преобразователь энергии.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 878913, Рисунок 3.9

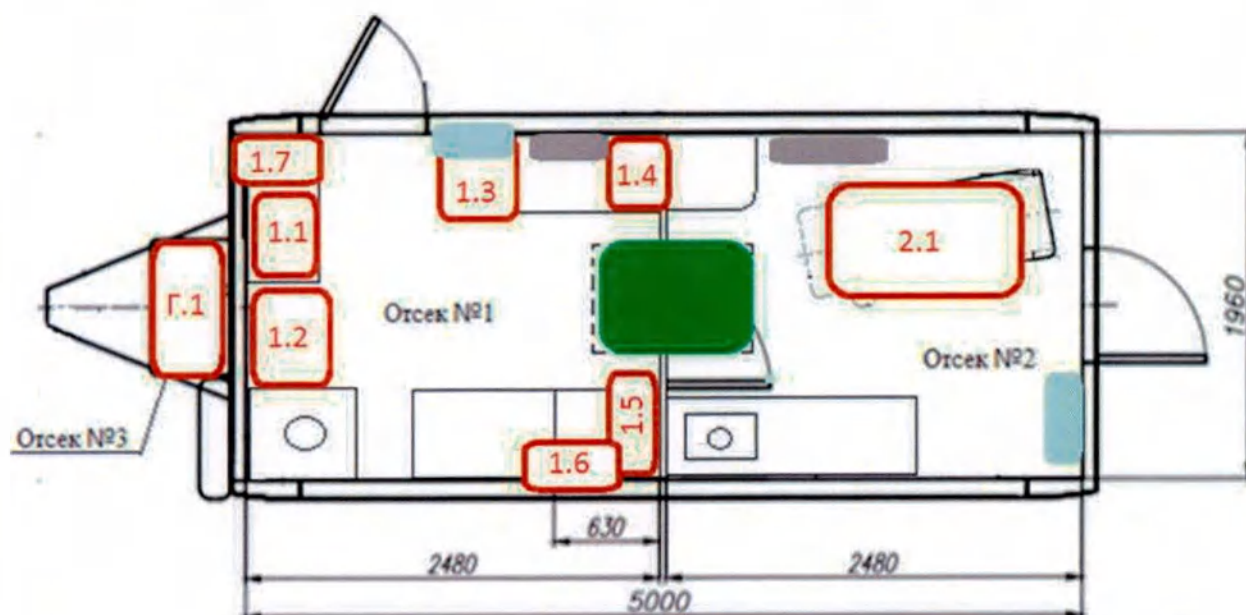


Рисунок 3.9.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

Г.1 - электрогенераторная установка;

1.1 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;

1.2 - аппарат ультразвуковой диагностический;

1.3 - холодильник;

1.4 - настенный тонометр;

1.5 - негатоскоп;

1.6 - воздушный отопитель;

1.7 - прибор приемно-контрольный охранный;

2.1 - гинекологическое кресло.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 185514, Рисунок 3.10

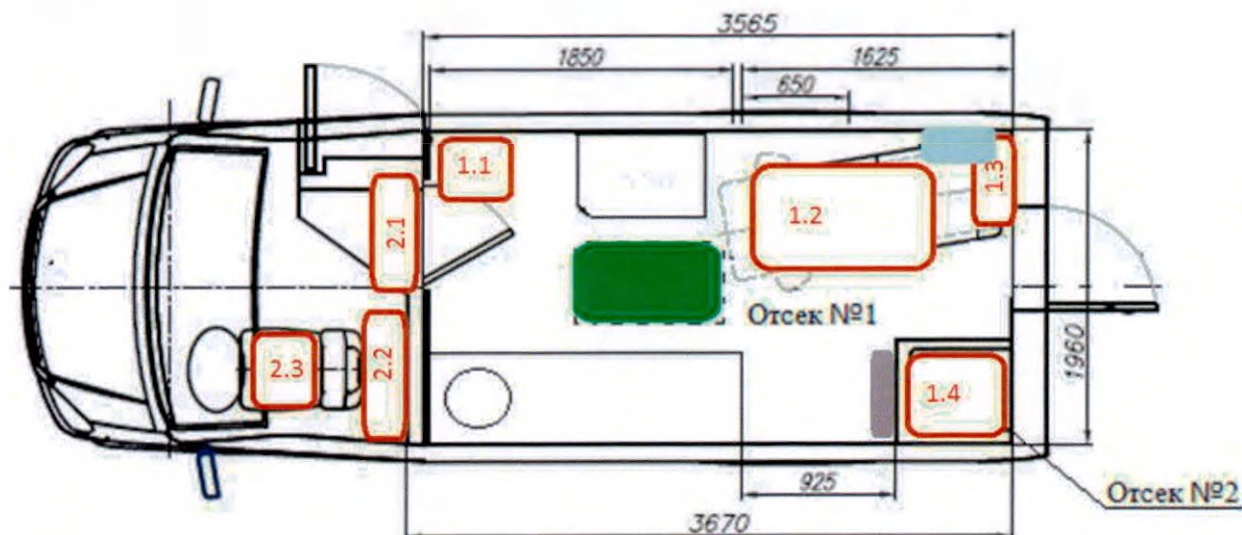


Рисунок 3.10.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - блок кондиционера;

1.1 - весы напольные;

1.2 - гинекологическое кресло/донорское кресло;

1.3 - прибор приемно-контрольный охранный;

1.4 - электрогенераторная установка;

2.1 - промышленная воздушная завеса;

2.2 - воздушный отопитель;

2.3 - многофункциональный автономный преобразователь энергии.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Фельдшерско-акушерский пункт» на базе транспортного средства 692732, Рисунок 3.11



Рисунок 3.11.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

Г.1 - воздушный отопитель;

Г.2 - электрогенераторная установка;

1.1 - гинекологическое кресло;

2.1 - промышленная воздушная завеса;

3.1 - прибор приемно-контрольный охранный;

3.2 - вентилятор промышленный;

3.3 - холодильник;

3.4 - многофункциональный автономный преобразователь энергии;

4.1 - ростомер;

5 - внешний блок кондиционера.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Флюорография» на базе транспортного средства 385527, Рисунок 3.12

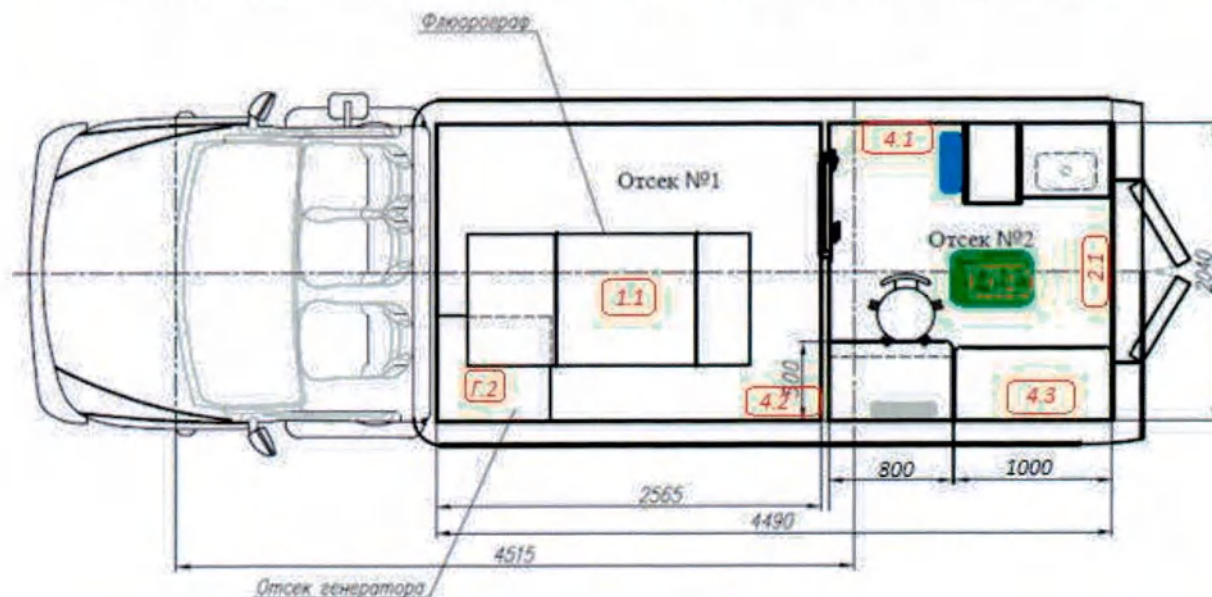


Рисунок 3.12.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

Г.1 - внешний блок кондиционера;

Г.2 - электрогенераторная установка;

1.1 - флюорограф;

2.1 - промышленная воздушная завеса;

4.1 - прибор приемно-контрольный охранный;

4.2 - фильтровентиляционная установка;

4.3 - воздушный отопитель.

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе
«Флюорография» на базе транспортного средства ПМК-48415К, Рисунок 3.12.1

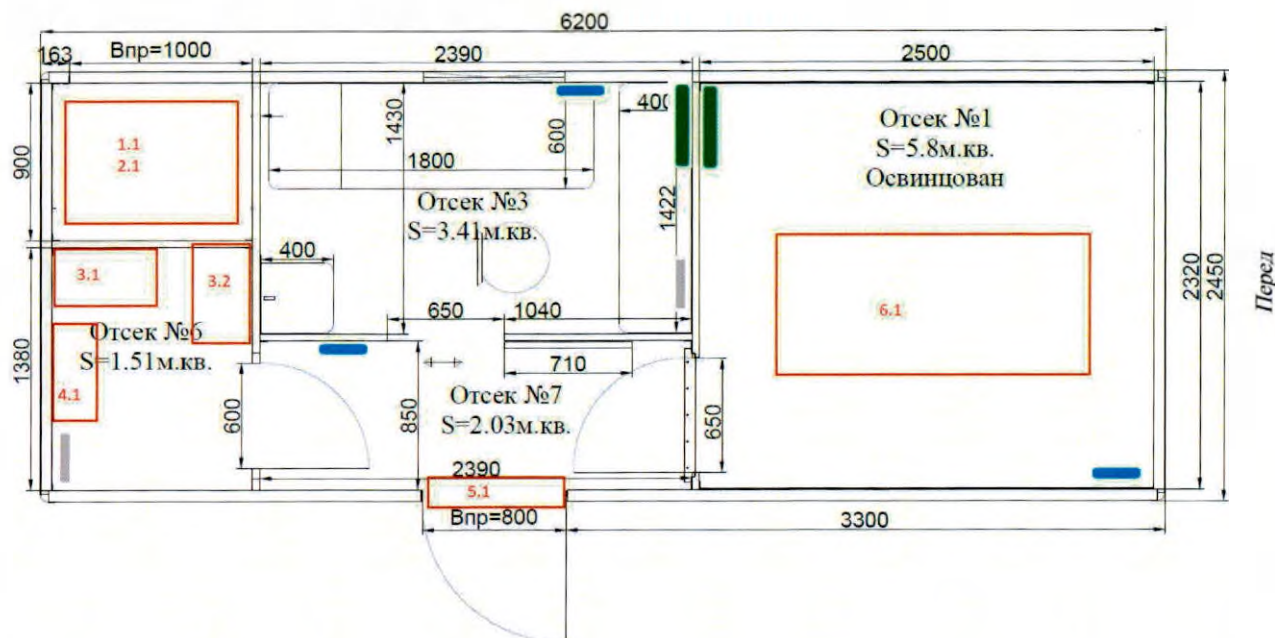


Рисунок 3.12.1

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

1.1 - внешний блок кондиционера;

2.1 - электрогенераторная установка;

3.1 - преобразователь напряжения;

3.2 - воздушный отопитель;

4.1 - фильтровентиляционная установка;

5.1 - промышленная воздушная завеса;

6.1 - флюорограф;

Схема расположения штатных мест медицинских и специальных изделий в Комплексе «Маммография» на базе транспортного средства ПМК-48415К, Рисунок 3.13

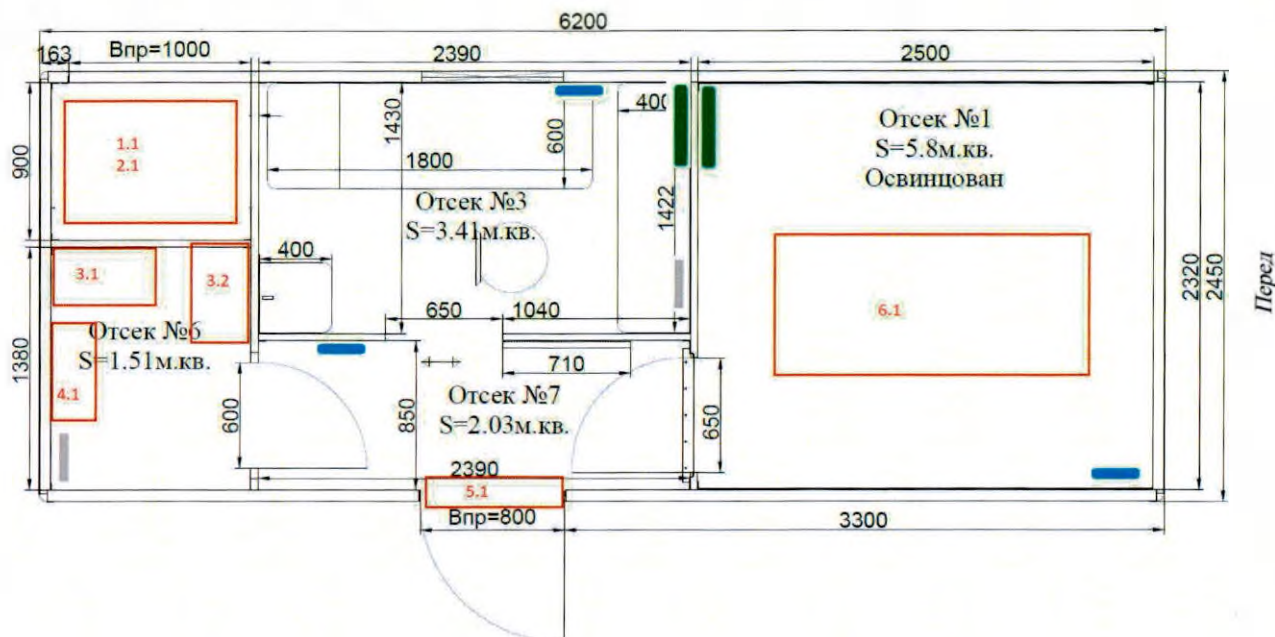


Рисунок 3.13.

■ - обогреватели электрические конвекционные;

■ - облучатели-рециркуляторы воздуха;

■ - внутренние блоки кондиционеров;

1.1 - внешний блок кондиционера;

2.1 - электрогенераторная установка;

3.1 - преобразователь напряжения;

3.2 - воздушный отопитель;

4.1 - фильтровентиляционная установка;

5.1 - промышленная воздушная завеса;

6.1 - флюорограф;

Указания по электромагнитной совместимости (ЭМС)

Будучи медицинским электрическим оборудованием, на которое распространяются особые меры защиты по электромагнитной совместимости (в соответствии со стандартом EN 60601-1-2:2007), настоящие «Указания по электромагнитной совместимости (ЭМС)» служат дополнением к соответствующим инструкциям по эксплуатации/техническому описанию.

Безопасное обращение

Представленные далее общие инструкции по технике безопасности должны соблюдаться во время работы с медицинским электрическим оборудованием:

- Перед эксплуатацией, проверьте состояние и функционирование продукции.
- предоставляйте права на эксплуатацию продукции и приспособлений только прошедшим необходимое обучение и обладающим специальными знаниями и опытом сотрудникам.
- храните инструкции по эксплуатации и указания по электромагнитной совместимости (ЭМС) для персонала в рабочей зоне.
- если необходимо, во время настройки продукции предпримите особые меры защиты от электростатического разряда (ЭСР) и для радиочастотных устройств.
- не пользуйтесь мобильными или портативными устройствами, излучающими высокочастотную энергию (например, мобильные/сотовые/GSM телефоны) в непосредственной близости от продукции, т. к. эти устройства могут воздействовать на представленный продукт.
- регулярно проверяйте сетевой шнур на предмет утечек тока и надежности заземления.

Меры защиты от электростатического разряда (ЭСР)

Для электрических разъемов с маркировкой «ESD-sensitivity» примите следующие меры защиты:

- не прикасайтесь к выводам таких разъемов.
- все электрическое оборудование, которое необходимо подключить, подсоедините к линии равных потенциалов.
- используйте только те приспособления, которые рекомендованы для эксплуатации.
- проконтролируйте, чтобы весь персонал был проинформирован, либо прошел необходимое обучение касательно мер защиты для ЭСР.

Указания и декларация соответствия

Указания и декларация производителя – Испытание на электромагнитную эмиссию

Оборудование предназначено для работы в электромагнитной обстановке, пояснение которой приведено ниже. Пользователю оборудования следует обеспечить ее применение в указанной обстановке.

Испытание на электромагнитную эмиссию	Соответствие	Электромагнитная обстановка - указания
Радиочастотные выбросы в соответствии с CISPR 1 1	Соответствие группе 1	Оборудование использует радиочастотную энергию только для внутренних функций. Таким образом, величина выбросов очень низкая, и не способна повлиять на расположенное вблизи электронное оборудование.
Радиочастотные выбросы в соответствии с CISPR 1 1	Соответствие классу Б	Оборудование пригодно для применения во всех местах, за исключением бытового назначения, и подключается непосредственно к общественной низковольтной сети электропитания, запи-
Гармонические выбросы в соответствии с IEC 61000-3-2	Соответствие классу А (IEC 61000-3-2)	

Колебания напряжения и фликер в соответствии с IEC 61000-3-3	Соответствие	тывающей здания, и используемой для бытовых нужд.
--	--------------	---

Указания и декларация производителей – Испытание на помехоустойчивость

Оборудование предназначено для работы в электромагнитной обстановке, пояснение которой приведено ниже. Пользователю оборудования следует обеспечить ее применение в указанной обстановке.

Испытание на помехоустойчивость	Контрольный уровень IEC 60601	Уровень соответствия	Электромагнитная обстановка - указания
Электростатический разряд (ЭСР) согласно стандарту IEC 61000-4-2	± 6 кВ контакт ± 8 кВ воздух	Соответствие	Полы должны быть изготовлены из досок, бетона или керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна составлять не менее 30 %.
Электростатический переходный процесс/выброс согласно стандарту IEC 61000-4-4	±2 кВ - для линий электропитания ±1 кВ - для линий ввода-вывода	Соответствие	Качество сети электропитания должно удовлетворять стандартной или медицинской обстановке.
Броски согласно стандарту IEC 61000-4-5	±1 кВ - при подаче помех по схеме "провод-провод" ±2 кВ - при подаче помехи по схеме "провод-земля"	Соответствие	Качество сети электропитания должно удовлетворять стандартной или медицинской обстановке.

Падения напряжения, перебои и изменения напряжения во входных линиях электропередач согласно IEC 61000-4-11	<5% (провал напряжения >95%) в течение 0,5 периода 40% (провал напряжения 60%) в течение пяти периодов 70% (провал напряжения 30%) в течение 25 периодов <5% (провал напряжения >95%) в течение 5 с	Соответствие	Качество сети электропитания должно удовлетворять стандартной или медицинской обстановке. Если пользователю оборудования необходим непрерывный режим работы во время перебоев в сети, рекомендуется подключать оборудование через источник бесперебойного питания.
Магнитное поле для частоты сети (50/60 Гц) согласно IEC 61000-4-8	3 А/м	Соответствие	Магнитные поля должны лежать в пределах допустимых для стандартной или медицинской обстановки.

Примечание 1: U_t – напряжение сети переменного тока до проведения контрольного уровня.

Указания и декларация производителей – Защита от электромагнитных полей

Оборудование предназначено для работы в электромагнитной обстановке, пояснение которой приведено ниже. Пользователю оборудования следует обеспечить применение в указанной обстановке.

Проверка защиты от электромагнитных полей	Контрольный уровень IEC 60601	Уровень соответствия	Электромагнитная обстановка – указания ²
			Портативные и мобильные радиочастотные устройства связи не должны находиться на расстоянии от какой-либо части оборудования, включая кабели, меньшем, чем рекомендуемый пространственный разнос, рассчитываемый по формуле для частоты передатчика. Рекомендуемый пространственный разнос 1:

Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по МЭК 61000-4-6	3 В (среднеквадратичное значение)	Соответствие	$d = 1.2 \sqrt{P}$
Излучаемое радиочастотное электромагнитное поле по МЭК 61000-4-3	3 В/м в полосе от 80 МГц до 2,5 ГГц	Соответствие	$d = 1.2 \sqrt{P}$ для 80-800 МГц $d = 2.3 \sqrt{P}$ для 800 МГц-2,5 ГГц где P – максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно заявленным характеристикам производителя, а d – рекомендуемый пространственный разнос в метрах (м). Напряженности поля от стационарных радиочастотных передатчиков, согласно электромагнитному анализу места установки ^а , должны быть ниже уровня соответствия в каждом частотном диапазоне ^б . Помехи могут появиться вблизи оборудования с маркировкой  .

Примечание ¹: на частотах 80 и 800 МГц применяется более высокий частотный диапазон.

Примечание ²: эти указания могут не применяться для всех случаев. На распространение электромагнитного поля влияет поглощение и отражение от конструкций, предметов, а также людей.

Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи и оборудованием

Оборудование предназначается для применения в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Пользователь оборудования может предупредить электромагнитные помехи за счет соблюдения минимального расстояния между портативными и мобильными радиочастотными устройствами связи (передатчиками) и оборудованием, соблюдая рекомендации, указанные ниже и зависящие от максимальной выходной мощности такого оборудования.

Номинальная максимальная мощность передатчика (Вт)	Расстояние разноса ¹ В зависимости от частоты передатчика (м)		
	150 кГц - 80 МГц $d = 1.2 \sqrt{P}$	80-800 МГц $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 МГц – 2,5 ГГц $d = 2.3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73

1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Расстояние разноса в метрах (м) для передатчиков, максимальная мощность которых не представлена в этой таблице, можно определить по уравнению для частоты передатчика, где Р – максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно заявленным характеристикам производителя.

Примечание 1: на частотах 80 и 800 МГц используется расстояние разноса для более высокого частотного диапазона.

Примечание 2: эти указания могут не применяться для всех случаев. На распространение электромагнитного поля влияет поглощение и отражение от конструкций, предметов, а также людей.

Материалы поверхностей, предполагающие контакт с телом пациента и медперсонала.

Материалы поверхностей, предполагающие контакт с телом пациента и медперсонала, должны изготавливаться из следующих материалов:

Наименование материала	НТД или марка материала	Изготовитель	Применение
Декоративный бумажно-слоистый пластик	Марка ДБСП ТГ 2/03/С	ООО «Вышневолоцкий МДОК», Россия	Отделочные материалы
Алюминий	Марка АД31	ООО «Уральская Горно-Металлургическая Компания», Россия	Алюминиевый профиль
Резина	Марка ПР-632	АОЗТ «МОСДИЗАЙНМАШ», Россия	Уплотнение стыковых соединений
Кожа искусственная	Марка ЕСО, состав: Тик 85, полиуретан СКУ 7Л	ООО «Чеховские мануфактуры», Россия	Обшивка стульев
Нержавеющая сталь	06ХН28МДТ	ЗАО «ВЗПС», Россия	Мойка
Алюминий	профиль алюминиевый марки 6060	ООО «Красноярский Металлургический Завод», Россия	Алюминиевый уголок
Композит, армированный стекловолокном Optiplan Polydet Perfomance	Покрытие «гелькоут», стекломат, УР-смола	OPTIPLAN GmbH, Германия	Сэндвич панели
Коммерческий линолеум	Марка ПВХ-С-7058 М	АО «ТАРКЕТТ», Россия	Напольное покрытие

**Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью**

сто сорок пять листов

Генеральный директор
подпись Горобец С.Л.



АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



г. Рязань

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит основные сведения по устройству, техническому обслуживанию, эксплуатации автомобилей-фургонов, а так же информацию о гарантии. Для обеспечения надежной и безопасной работы автомобиля необходимо производить уход и обслуживание в полном соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации и Руководством по эксплуатации на базовое шасси.

Завод постоянно ведет работу по совершенствованию конструкции изделий, поэтому изменение конструктивных элементов кузова, не влияющие на его эксплуатационные свойства, могут быть не отражены в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Автомобиль-фургон предназначен для перевозки упакованных и уложенных в тару грузов и оборудования, в том числе продовольственных, требующих защиты от атмосферных и температурных воздействий. Фургон предназначен для эксплуатации по дорогам с твердым покрытием общего пользования. Кузов-фургон закрытого типа изготовлен в исполнении У категории 1 по ГОСТ15150 и рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от -40° до $+40^{\circ}$ С и относительной влажности 80%.

Для правильной эксплуатации автомобиля-фургона кроме настоящего руководства, необходимо изучить и пользоваться руководством по эксплуатации базового шасси и документами на комплектующие изделия. Водитель автомобиля-фургона обязан следить за его техническим состоянием.

2. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасная и исправная работа автомобиля-фургона, а как следствие и длительный срок его службы могут быть обеспечены только при внимательном и регулярном уходе с соблюдением всех правил и требований, изложенных в настоящем руководстве и в руководстве по эксплуатации на базовое шасси.

Для входа в кузов-фургон необходимо пользоваться подножкой или лестницей.

При погрузочно-разгрузочных работах необходимо открыть и зафиксировать двери с помощью фиксаторов дверей, при этом принять меры, предотвращающие выпадения груза из фургона.



Вариант исполнения фурнитуры и фиксатора могут отличаться от представленных на фото.

Обкатка нового автомобиля должна производиться согласно Руководству по эксплуатации на базовое шасси. В это время автомобиль требует от водителя повышенного внимания и особого ухода.

При движении автомобиля-фургона к месту выгрузки задним ходом для предотвращения наезда на препятствие и появление людей в зоне движения автомобиля необходимо использовать зеркала заднего вида и помощь других лиц.

При движении от водителя требуется повышенное внимание, так как фургон ограничивает обзор заднего вида. Применение двух зеркал заднего вида **ОБЯЗАТЕЛЬНО**.

Максимально допустимая скорость движения автомобиля оценивается, исходя из дорожных условий и характера груза.

При эксплуатации не допускается перегружать автомобиль сверх установленной массы перевозимого груза.

Масса перевозимого груза внутри фургона не должна нарушать центр тяжести автомобиля и предельно допустимые нагрузки на оси.

Наиболее тяжелая часть груза внутри промтоварного или изотермического кузова фургона должна быть расположена вблизи пола кузова.

Перед поездкой водитель обязан проверить надежность запираания дверей, исправность запоров. Запрещается движение автомобиля при незафиксированных замках (запорах) двери или при ослабленном креплении кузова к шасси автомобиля.

Перевозку продовольственных товаров производить в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

При маневрировании в процессе погрузочных работ с открытыми дверьми фургона, створки дверей должны быть зафиксированы.

При загрузке фургона водитель обязан равномерно распределить груз по площади кузова и зафиксировать его до начала движения.

Перевозка грузов в кузове фургона должна осуществляться только в специально предназначенной для данного груза таре. Перевозимый груз необходимо надежно зафиксировать от перемещения по кузову во время движения автомобиля.

При техническом обслуживании узлов, расположенных под кузовом фургона, необходимо выключить зажигание,

автомобиль затормозить стояночным тормозом и включить низшую передачу, под колеса положить противооткатные упоры (не входит в комплект поставки).

За соблюдение правил пожарной безопасности, автомобиля в процессе эксплуатации ответственность несет владелец транспортного средства.



Правила перевозки и крепление груза в фургоне

Грузы, перевозимые в кузове автомобиля-фургона, закрепляются независимо от расстояния перевозки и комплектации кузова-фургона. Выбор средств крепления зависит от типа и состава груза. Перевозимый груз должен находиться на специальных паллетах или в товарных тележках. В случае пакетирования на паллете разносортного груза, его необходимо плотно уложить и стянуть плёнкой стрейч. При использовании товарных тележек на время транспортировки колёса необходимо застопорить.

Для крепления грузов применяются средства крепления многоразового использования: такелажные кольца, такелажные рейки, распорные устройства, стойки, стяжные ремни.



Запрещается применять для крепления груза: механические вспомогательные средства (неспециализированные штанги, рычаги, монтировки и другое), крепёжные ремни завязанные узлом или перекрученные.

Перед погрузкой грузоотправителем проводится визуальный контроль состояния средств крепления. Таблички с

маркировкой крепежных ремней, должны чётко читаться и не должны иметь повреждений.

Крепежные ремни запрещается применять при: образовании разрывов и надрезов, которые нарушили более 10 % ткани крепежного ремня, поперечных трещин или расслоений, значительных очагов коррозии металлических частей, повреждении зажимных или соединительных элементов, повреждении несущих швов, отсутствии маркировки (флажков, табличек) и невозможности определения силы нагрузки крепежного ремня.



В случае превышении максимальной нагрузки 1000кг и несоблюдении схемы строповки груза, повреждение такелажных реек и внутренней обшивки фургона не является гарантийным случаем



Запрещается движение с неисправными внешними световыми приборами



Запрещается водителю покидать свое место или оставлять транспортное средство, если не приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства



В кузове фургона запрещается перевозить грузы в навал, сыпучие и другие неупакованные, не зафиксированные грузы



Запрещается перевозка людей и животных



Не допускается перевозка грузов в подвешенном положении на самостоятельно установленных перекладинах, стойках, крюках и т.п. Запрещается крепление и подвешивание груза к рейкам обрешётки промтоварного фургона



В случае установки надстройки с увеличенными габаритными размерами относительно стандартных максимальная скорость движения 80 км/ч



При эксплуатации автомобиля-фургона в зимних условиях не допускается наличие снега и льда на крыше фургона



Во избежание различных деформаций и повреждений пола (вмятин и пр.) запрещается перевозить без дополнительных приспособлений грузы с большой массой и маленькой опорной площадью. Максимальное точечное давление на пол фургона (в статике) не должно превышать 25 кг на см²



Запрещается работа с неисправным электрооборудованием и электропроводкой



Запрещается движение с не закрепленным грузом



В кузове запрещается курить, проводить работы с открытым огнем и пользоваться легковоспламеняющимися, само возгораемыми материалами, а также применять взрывопожарные устройства



Запрещается эксплуатация транспортного средства с превышением допустимой грузоподъемности



Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы автомобиля-фургона, в случае несоблюдения правил его эксплуатации и при внесении потребителем изменений в его конструкцию



В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕГО С НАРУШЕНИЯМИ УКАЗАНИЙ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ ВНЕСЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ РЕКЛАМАЦИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ НЕ ПРИНИМАЕТ И ПРЕТЕНЗИИ НЕ РАССМАТРИВАЕТ! ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ!

3. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Автомобиль-фургон представляет собой кузов-фургон закрытого типа, установленный на шасси грузового автомобиля или шасси полуприцепа.

Автомобиль-фургон в своем составе имеет две основные единицы:

1. Базовое шасси – описано в Руководстве по эксплуатации на базовое шасси.
2. Кузов-фургон с различными вариантами наружной обшивки и разными варианты исполнения:
 - фургон промтоварный;
 - фургон изотермический;
 - фургон для перевозки мясных туш;
 - фургон изотермический мульти температурный;
 - фургон Euro – Prom (толщина панелей 25-30 мм);
 - фургон хлебный.

Наружная и внутренняя обвязка (обрамление) кузова-фургона может быть выполнена из оцинкованных или алюминиевых прямоугольных и скруглённых профилей. В передних верхних углах установлены пластиковые колпаки, защищающие стыки наружной обвязки.

Фургон может быть разделен на отсеки сообщающиеся между собой алюминиевыми входными группами или сдвижными дверями типа «купе». Вход в фургон может осуществляться через задний дверной портал или через боковую входную группу.

Задний и боковой дверной портал может быть выполнен из оцинкованных или нержавеющей профилей, на пороге заднего портала установлены резиновые демпферы различной модификации, обеспечивающие надёжную защиту при подъезде к пандусу. Двери фургона двухстворчатые, предусматривают угол открывания 270°, или одностворчатые, угол открывания 180°. Запорная фурнитура: штангового или врезного типа - оцинкованная или нержавеющая, или накладного типа. Все указанные типы фурнитуры надёжно фиксируют двери и обеспечивают прилегание многолепесткового уплотнительного профиля. Дверное

полотно с обшивками из оцинкованного лакированного металла или пластика.

Для всех разновидностей фургонов в базовом исполнении все элементы основания пола, наружной обвязки и дверного портала покрываются высококачественной двухкомпонентной полиуретановой эмалью.

Светотехника фургона выполнена с применением LED компонентов, используются плоские фонари. Степень защиты светотехники IP – 65.

При установке на шасси автомобиля кузов-фургон комплектуется выдвижной лестницей (подножкой), пластиковыми крыльями с фирменными резиновыми брызговиками, боковой защитой и задним бампером (при необходимости).

По желанию покупателя и производителя базового шасси кузов оборудуется отопителем или холодильной установкой.

Установка холодильного оборудования (фургон изотермический и варианты его исполнения)

В переднюю стенку и (или) в крышу Вашего фургона встроены закладные элементы для крепления холодильного оборудования, модель и марка которого указаны в п.11 настоящего руководства.

Если при формировании заказа модель и марка холодильного оборудования не были заранее оговорены, фургон изготавливается без закладных элементов. При установке холодильного оборудования на такие фургоны необходимо:

- получить согласование завода-изготовителя на дооборудование фургона холодильным оборудованием (для согласования необходимо сообщить марку и модель шасси, заводской номер фургона и модель холодильного агрегата);
- приобрести у завода-изготовителя фургона монтажный комплект и получить инструкции по дооборудованию фургона;
- произвести дооборудование кузова-фургона элементами усиления на станции авторизованного дилера завода-изготовителя или в организации, выполняющей монтаж холодильного оборудования согласно инструкции завода-изготовителя.



Установка холодильного оборудования допускается только после выполнения вышеперечисленных требований



В случае несанкционированной установки холодильного оборудования завод-изготовитель не несет гарантийные обязательства, а так же не гарантирует надежность и безопасность эксплуатации автомобиля-фургона

По желанию заказчика под фургоном может быть выполнена «юбка», включающая ящики различного назначения и фальшь панели. Ящики выполняются как с каркасом внутри, так и без каркасные, с внутренним уплотнителем, запирающие на замки с «Т»-образной ручкой на ключ.

4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Закрывание задней двери происходит в следующем порядке:

1. Освободить дверной фиксатор «молоточек» или «штанговый» (зависит от исполнения).
2. Заккрыть левую створку двери.
3. Повернуть ручку штангового запора от себя влево, при этом происходит прижатие створок кулачками.
4. Зафиксировать ручку в защелку замка или нажать до щелчка для ручки Push.
5. Заккрыть правую створку двери.
6. Повернуть ручку штангового запора от себя вправо.
7. Зафиксировать ручку в защелку замка или нажать до щелчка для ручки Push.
8. Проверить надежность затяжки кулачков штанговых запоров (потянуть дверь на себя).
9. Заккрыть крышки замков.
10. При необходимости установить навесные замки и пломбы.

Открывание двери производится в обратном порядке.

Для боковой двери закрытие производить аналогичным способом.

Включение освещения внутри кузова-фургона производится нажатием на клавишу в основании плафона, из кабины или выключателем на распаячной коробке под фургоном.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Автомобиль-фургон поставляется полностью укомплектованным в соответствии с утвержденной документацией и договором на поставку.



Потребитель должен укомплектовать автомобиль-фургон знаком ограничения скорости, знаком аварийной остановки, огнетушителем, противооткатными упорами и аптечкой с медикаментами

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО)

Техническое обслуживание шасси должно выполняться в соответствии с сервисной книжкой, прикладываемой к автомобилю.

При техническом обслуживании автомобиля необходимо дополнительно производить техническое обслуживание кузова-фургона.

Ежедневно проводить визуальный осмотр надежности крепления кузова-фургона к раме шасси. Продольное и поперечное смещение кузова-фургона относительно рамы шасси не допускается. При необходимости незамедлительно обратиться на СТО дилера.

Резиновые уплотнители дверей необходимо очищать от загрязнений и обрабатывать силиконовой смазкой не реже, чем один раз в месяц (для сохранения эластичности и предотвращения растрескивания), при создании помех уплотнителю поврежденными (смещенными) элементами заднего портала необходимо в кратчайшие сроки устранить помеху самостоятельно или обратиться к дилеру. Не является гарантийным случаем.

Регулярно проверять целостность пластиковых колпаков на углах наружного обрамления. В случае повреждений незамедлительно заменить для исключения попадания влаги внутрь фургона и сэндвич-панели.

Периодически кузов-фургон необходимо мыть теплой водой и насухо протирать. Во избежание преждевременного разрушения окраски запрещается мыть кузов-фургон или выезжать с мокрым кузовом-фургоном при отрицательной температуре воздуха, протирать кузов-фургон бензином, керосином, маслом или концентрированным щелочным раствором, соскабливать или стирать тряпкой прилипшую грязь, ее следует предварительно отмачивать.

Необходимо систематически проводить тщательный осмотр кузова-фургона на предмет появления очагов коррозии и своевременно их устранять на СТО дилера.

При необходимости наружные поверхности кузова следует подкрашивать эмалями (на полиуретановой основе) под цвет существующей краски.

Мойка и обработка фургона для перевозки пищевых продуктов должна производиться в соответствии с

действующими санитарными нормами и правилами, моющими и дезинфицирующими средствами, разрешенными Министерством здравоохранения РФ.



Запрещается наружная и внутренняя мойка фургона с резким перепадом температур воды и окружающего воздуха. После мойки необходимо выдержать автомобиль в отапливаемом боксе до уравнивания температур

Техническое обслуживание в зависимости от периодичности подразделяется на следующие типы:

Ежедневный технический осмотр (ЕТО);

Техническое обслуживание (ТО);

Сезонное техническое обслуживание (СТО).

Объемы работ по техническому обслуживанию приведены в таблице 2. Периодичность проведения ТО соответствует периодичности ТО шасси.

Техническое обслуживание кузова-фургона необходимо выполнять на предприятиях технического обслуживания дилера, а в случае удаленности места эксплуатации транспортного средства от указанных предприятий в организациях, имеющих соответствующую лицензию и сертификат соответствия на выполнение данного вида работ.

Все виды технического обслуживания автомобиля-фургона производятся за счет владельца автомобиля.

При тяжелых условиях эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, не дожидаясь наступления срока очередного технического обслуживания.



В зимнее время года при эксплуатации по дорогам, обработанным химическими реактивами ежедневная мойка обязательна

Таблица 2

Операция	ЕТО	СТО	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7
1. Очистить автомобиль-фургон от загрязнений. Протереть влажной, а затем сухой ветошью внутренние поверхности кузова, задние и передние фонари, указатели поворотов, номерной знак, светоотражатели	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Проверить отсутствие наружных повреждений, надежность замков двери при обнаружении неисправности устранить их на СТО дилера	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3. Провести визуальный осмотр надежности крепления кузова-фургона к раме шасси. При необходимости устранить на СТО дилера	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4. Проверить и при необходимости подтянуть резьбовые соединения кузова-фургона	-	+	+	+	+	+	+	+	+
5. Проверить состояние резиновых уплотнителей дверей и при необходимости провести ремонт (замену) на СТО дилера	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6. Проверить исправность действия сигнала «СТОП», задних и передних фонарей, указателей поворота, освещения номерного знака и внутреннего освещения	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7. Проверить состояние лакокрасочного покрытия автомобиля. Места повреждения устранить подкраской на СТО дилера	-	+	+	+	+	+	+	+	+



**При несвоевременном выполнении работ
предусмотренных ТО гарантийные обязательства
утрачивают свою силу**

7.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
1. Ослабление крепления кузова к шасси	Ослабление затяжки резьбового крепления Сорвана резьба элементов крепления	Подтянуть или заменить элемент крепления (на СТО)
2. Нарушение герметичности дверей	Ослабление крепления элементов двери Повреждения уплотнений Сломаны фиксаторы дверей	Подтянуть элемент крепления двери (на СТО) Заменить уплотнитель (на СТО) Отремонтировать или заменить (на СТО)
3. Не горят лампы фонарей	Перегорели лампы Отсутствует контакт в соединении	Заменить лампы Проверить места соединений, обратиться на СТО

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Автомобиль-фургон может транспортироваться железнодорожным транспортом или своим ходом в соответствии с договором на поставку.

При транспортировании своим ходом необходимо руководствоваться правилами перевозок грузов автомобильным транспортом МинАвтотранс, принять меры для защиты от механических повреждений автомобиля-фургона и его лакокрасочного покрытия.

Автомобиль-фургон, поступающий потребителю, может храниться без проведения консервации не более 6 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Хранение и транспортирование автомобиля-фургона, в части воздействия климатических факторов внешней среды, должно соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150.

9. МАРКИРОВКА

Маркировка автомобиля-фургона соответствует ОСТ 37.001.269.

С правой стороны, в нижнем углу на внешней стороне передней стенки фургона, закреплена табличка предприятия-изготовителя. В табличке указаны:

- товарный знак и наименование предприятия изготовителя;
- идентификационный номер ТС;
- полная допустимая масса автомобиля-фургона;
- допустимая масса, приходящаяся на переднюю ось;
- допустимая масса, приходящаяся на заднюю ось;
- одобрение типа транспортного средства.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации на автомобиль-фургон составляет 24 месяца или 150 000 км (что наступит ранее).

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня регистрации автомобиля-фургона в ГИБДД, но не позднее 10 дней со дня получения автомобиля-фургона первым потребителем, за исключением некоторых комплектующих, перечисленных ниже:

- гарантия на лакокрасочное покрытие 1 год или 20000 км (в зависимости от того, что наступит ранее);
- гарантия на светодиодные фонари и электропроводку 1 год или 20000 км (в зависимости от того, что наступит ранее);
- гарантия на фурнитуру и уплотнительный профиль 1 год или 20000 км (в зависимости от того, что наступит ранее);
- гарантия на дополнительное оборудование (генераторы, отопитель, кондиционеры, гидроборта, АКБ и т.д.) устанавливается в соответствии с условиями заводов-изготовителей этого оборудования.

В течение гарантийного срока эксплуатации завод-изготовитель безвозмездно заменяет или ремонтирует (по принятым заводом рекламациям от потребителя) дефектные и преждевременно пришедшие в негодность по вине изготовителя элементы конструкции кузова-фургона. При условии соблюдения правил эксплуатации и своевременного прохождения ТО, изложенных в настоящем руководстве, и при

предъявлении изготовителю рекламационного акта и дефектных элементов.

В извещении потребитель должен указать: характер и признаки неисправности или поломки, модель, дату приобретения, пробег автомобиля-фургона, на котором обнаружены неисправности, наименование ближайшей железнодорожной станции, а также точный почтовый адрес.

При получении извещения о неисправности предприятие-изготовитель уведомляет потребителя о посылке своего представителя для расследования причин поломки или дает согласие на разборку механизма и на составление рекламационного акта. При этом предприятие-изготовитель сообщает, какие детали должны быть высланы одновременно с рекламационным актом.

Акт должен быть составлен в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен изготовителю или продавцу.

Дефектные элементы отправлять только по требованию завода-изготовителя.



Гарантийные обязательства на базовое шасси, согласно эксплуатационной документации на шасси автомобиля



Гарантийные обязательства не распространяются в отношении естественного износа:

нормальный износ любых деталей, старение и разрушение покрытий, цвета победжалости и потеря блеска на фурнитуре, старение лакокрасочного слоя (естественное выцветание), износ резиновых деталей.



Гарантийные обязательства ограничены дефектами производственного характера и не распространяются на следующие случаи:

регламентные работы при плановом техническом обслуживании, включая диагностические и регулировочные работы, а также разрушение одноразовых элементов и

расходование других материалов при техническом обслуживании;

незначительные отклонения, не влияющие на качество, характеристики или работоспособность кузова-фургона или его элементов (слабый шум, скрип и вибрация, щели между панелями, допускаемые стандартами ООО «ТТМ Центр», дефекты покрытия, не видимые в нормальных условиях и т.д.).

ущерб, возникший как следствие дефекта, не заявленного своевременно и не устраненного;

повреждение кузова-фургона в результате дорожно-транспортного происшествия, неосторожности, пренебрежительного обращения с кузовом-фургоном, использование транспортного средства в гонках, ралли и т.п.;

повреждение кузова-фургона, вызванные внешними воздействиями (химическими веществами, кислотными дождями, частями дорожного покрытия: камни, песок, соль, гравий и т.п.), пожаром, катастрофами в результате техногенной деятельности человека или его небрежности, а также стихийными бедствиями;

повреждения в результате погрузки-разгрузки или транспортировки груза;

расходы, связанные с невозможностью использовать транспортное средство, потерей времени, расходы на топливо, телефонную связь, транспортные расходы, потеря доходов и другие коммерческие потери;

расходные и прочие элементы, используемые либо подверженные износу или разрушению при нормальной эксплуатации: прокладки различных типов, плавкие предохранители, лампы накаливания и т.д.;

невыполнения потребителем требований, изложенных в руководстве по эксплуатации на автомобиль-фургон и руководстве по эксплуатации на базовое шасси;

самостоятельной разборки или ремонта узлов конструкции;

внесение потребителем изменений в конструкцию или комплектацию транспортного средства, не согласованных с изготовителем, в том числе установка дополнительного оборудования;

регулирующие работы, в том числе регулировка зазоров;

несвоевременное прохождение или не прохождение ТО.



Гарантийные обязательства в отношении лакокрасочного покрытия изделия утрачивают силу, если дефект является следствием:

механического повреждения покрытия в результате эксплуатации (сколы, царапины);

применение потребителем синтетических растворителей для протирки поверхностей с нанесенным лакокрасочным покрытием;

повреждения лакокрасочного покрытия связанного с монтажом и демонтажем рекламной продукции и прочей символики, нанесенной посредством самоклеящейся пленки;

нарушения правил хранения и консервации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации;

несвоевременное прохождение ТО.

Изготовитель не несет ответственность за ущерб (вред) или косвенные убытки, нанесенные перевозимому грузу транспортным средствам.

Гарантийные обязательства утрачивают силу при не своевременном проходе ТО предусмотренных в разделе **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**, а также отсутствия в паспорте соответствующих отметок об их проведении.

По вопросам гарантийного ремонта Потребитель должен обращаться к дилеру, у которого был приобретен автомобиль-фургон.

В случае невозможности обращения к дилеру интересующая информация может быть получена по адресу: Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9,

Служба качества ООО «ТТМ Центр».

Тел. (4912) 31-27-13, 24-54-78, 31-24-20.

E-mail: otk-cttm@mail.ru

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Автомобиль-фургон изготовлен в соответствии с ТУ и технической документации, принят ОТК и признан годным для эксплуатации.

Заводское обозначение кузова-фургона ПМК-48415К
фургон пластик сервис

Заводской номер кузова-фургона 23-4253Т

Закладные элементы для крепления холодильного оборудования:

Дата изготовления "07" июня 2023 г.

Мастер ОТК К
фамилия и подпись



Торгующее предприятие ООО ТТМ-Центр
наименование и адрес
г. Рязань, р-н Карачев. д. 7
Дата продажи "07" июня 2023 г.

Печать торгующего
предприятия



С
подпись ответственного лица

С инструкцией по эксплуатации и гарантийными обязательствами ознакомлен,
претензий по комплектности и целостности автомобиля-фургона
зав. № _____ / _____ не имею.

должность

организация

фамилия и подпись

____ " ____ 201 ____ г.

дата

Л И Н И Я О Т Р Ы В А

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН (хранится у продавца)

С инструкцией по эксплуатации и гарантийными обязательствами ознакомлен,
претензий по комплектности и целостности автомобиля-фургона
зав. № _____ / _____ не имею.

должность

организация

фамилия и подпись

____ " ____ 201 ____ г.

дата

КОРЕШОК ТАЛОНА

на техническое обслуживание автомобиля-фургона мод. _____

Изъят " _____ " 201 ____ г. Исполнитель _____

(фамилия подпись)

Выполнены работы _____

ТАЛОН

**На гарантийное обслуживание
автомобиля-фургона**

Модель _____

Заводской № _____ / _____

Выполнены работы _____

Отметки о проведении осмотра
изделия _____

" _____ " 201 ____ г.

Исполнитель _____
(печать, фамилия и подпись)

(наименование и адрес предприятия, выполнившего
техническое обслуживание)

Владелец _____
(наименование и адрес)

(должность и подпись руководителя предприятия)

" _____ " 201 ____ г.

КОРЕШОК ТАЛОНА

на техническое обслуживание автомобиля-фургона мод. _____

Изъят " _____ " 201 ____ г. Исполнитель

(фамилия подпись)

Выполнены работы

ТАЛОН

На гарантийное обслуживание
автомобиля-фургона

Модель _____

Заводской № _____ / _____

Выполнены работы _____

Отметки о проведении осмотра
изделия _____

" _____ " _____ 201 ____ г.

Исполнитель _____
(печать, фамилия и подпись)

(наименование и адрес предприятия, выполнившего

техническое обслуживание)

Владелец _____
(наименование и адрес)

(должность и подпись руководителя предприятия)

" _____ " _____ 201 ____ г.

КОРЕШОК ТАЛОНА

на техническое обслуживание автомобиля-фургона мод. _____

Изъят " _____ " 201 ____ г. Исполнитель _____

(фамилия подпись)

Выполнены работы _____

ТАЛОН

**На техническое обслуживание ТО-1
автомобиля-фургона**

Модель _____

Заводской № _____ / _____

Выполнены работы _____

Отметки о проведении осмотра
изделия _____

" _____ " _____ 201 ____ г.

Исполнитель _____
(печать, фамилия и подпись)

(наименование и адрес предприятия, выполнившего
техническое обслуживание)

Владелец _____
(наименование и адрес)

(должность и подпись руководителя предприятия)

" _____ " _____ 201 ____ г.

КОРЕШОК ТАЛОНА

на техническое обслуживание автомобиля-фургона мод. _____

Изъят " _____ " 201 ____ г. Исполнитель

(фамилия подпись)

Выполнены работы _____

ТАЛОН

**На техническое обслуживание ТО-2
автомобиля-фургона**

Модель _____

Заводской № _____ / _____

Выполнены работы _____

Отметки о проведении осмотра
изделия _____

" _____ " _____ 201 ____ г.

Исполнитель _____
(печать, фамилия и подпись)

(наименование и адрес предприятия, выполнившего
техническое обслуживание)

Владелец _____
(наименование и адрес)

(должность и подпись руководителя предприятия)

" _____ " _____ 201 ____ г.

КОРЕШОК ТАЛОНА

на техническое обслуживание автомобиля-фургона мод. _____

Изъят " _____ " 201 ____ г. Исполнитель

(фамилия подпись)

Выполнены работы

ТАЛОН

**На техническое обслуживание ТО-3
автомобиля-фургона**

Модель _____

Заводской № _____ / _____

Выполнены работы _____

Отметки о проведении осмотра
изделия _____

" _____ " _____ 201 ____ г.

Исполнитель _____
(печать, фамилия и подпись)

(наименование и адрес предприятия, выполнившего
техническое обслуживание)

Владелец _____
(наименование и адрес)

(должность и подпись руководителя предприятия)

" _____ " _____ 201 ____ г.

КОРЕШОК ТАЛОНА

на техническое обслуживание автомобиля-фургона мод. _____

Изъят " _____ " 201 ____ г. Исполнитель _____

(фамилия подпись)

Выполнены работы _____

ТАЛОН

**На техническое обслуживание ТО-4
автомобиля-фургона**

Модель _____

Заводской № _____ / _____

Выполнены работы _____

Отметки о проведении осмотра
изделия _____

" _____ " _____ 201 ____ г.

Исполнитель _____
(печать, фамилия и подпись)

(наименование и адрес предприятия, выполнившего
техническое обслуживание)

Владелец _____
(наименование и адрес)

(должность и подпись руководителя предприятия)

" _____ " _____ 201 ____ г.

КОРЕШОК ТАЛОНА

на техническое обслуживание автомобиля-фургона мод. _____

Изъят “ ” 201 г. Исполнитель _____

(фамилия подпись)

Выполнены работы _____

ТАЛОН

**На техническое обслуживание ТО-5
автомобиля-фургона**

Модель _____

Заводской № _____ / _____

Выполнены работы _____

Отметки о проведении осмотра
изделия _____

“ ” 201 г.

Исполнитель _____
(печать, фамилия и подпись)

(наименование и адрес предприятия, выполнившего

техническое обслуживание)

Владелец _____
(наименование и адрес)

(должность и подпись руководителя предприятия)

“ ” 201 г.

КОРЕШОК ТАЛОНА

на техническое обслуживание автомобиля-фургона мод. _____

Изъят " _____ " 201 ____ г. Исполнитель _____

(фамилия подпись)

Выполнены работы _____

ТАЛОН

**На техническое обслуживание ТО-6
автомобиля-фургона**

Модель _____

Заводской № _____ / _____

Выполнены работы _____

Отметки о проведении осмотра
изделия _____

" _____ " _____ 201 ____ г.

Исполнитель _____
(печать, фамилия и подпись)

(наименование и адрес предприятия, выполнившего
техническое обслуживание)

Владелец _____
(наименование и адрес)

(должность и подпись руководителя предприятия)

" _____ " _____ 201 ____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Дата	Наименование работы	Срок действия	Должность, фамилия и подпись

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
3. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.....	10
4. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ	12
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ	13
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО).....	14
7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	17
8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ	17
9. МАРКИРОВКА	18
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	41

Адрес предприятия изготовителя:
Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9.
Тел. (4912) 31-27-13, 24-54-78, 31-24-20.

ООО "ТТМ Центр"
<http://www.centrttm.ru>
fs@cttm.ryazan.ru

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

сорок два

(42) листов

Генеральный директор
подпись Горобец С.И.

