




Le soussigné M^r associé de
la SCP Mont Blanc Office, notaires à
SALLANCHES (Haute-Savoie), atteste que la
signature ci-dessus a été apposée devant moi
par Jr Duthil

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

ANTHOGYR SAS («Антожир САС»), Франция

Director of Quality and Regulatory Affairs / Директор отдела
качества и нормативно-правового регулирования
(position/должность)

Jérôme DUTHIL / Жером ДЮТИЛЬ
(name/имя)

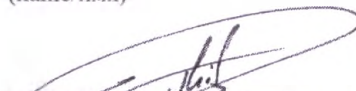
(signature/подпись)

«30» 03 2023

«день» месяц год (цифрами) / «day» month year (numerals)

Stamp / М.П.



SAS au Capital de 1.254.040 €
2237, Avenue André Lasquin
74700 SALLANCHES

Tel (33) 04 50 58 02 37 - Fax (33) 04 50 93 78 60
Siret 605 620 442 00034 APE 3250A

Инструкция по применению медицинского изделия

Имплантат дентальный Аxiom X3, Аxiom TL в вариантах
исполнения

Instruction for Use for the medical device

Dental implant Axiom X3, Axiom TL in modifications

1	Оглавление	
1	Наименование медицинского изделия (далее МИ)	4
2	Информация о производителе	12
3	Назначение	12
4	Область применения.....	12
5	Потенциальный потребитель.....	12
6	Показания к применению	12
7	Противопоказания	12
8	Возможные побочные действия	13
9	Предупреждения и меры предосторожности.....	14
10	Сведения о безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ).....	15
11	Общее описание МИ	15
12	Технические характеристики	18
13	Сведения о стерильности и кратности применения	65
14	Подготовка к работе с МИ.....	66
15	Работа с МИ	66
15.1	Извлечение имплантата из упаковки	66
15.2	Установка имплантата Axiom X3.....	68
15.3	Субкрестальное положение имплантата	70
15.4	Ориентация имплантата	71
15.5	Установка винта-заглушки	72
16	Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие	72
17	Условия эксплуатации, хранения и транспортировки изделий	76
18	Расшифровка символов маркировки	77
19	Сведения об утилизации	78
20	Срок годности	78
21	Клиническая эффективность	78
22	Гарантийные обязательства.....	79
23	Рекламации.....	80

Сокращения, используемые в настоящем документе

R – Обозначение ортопедической платформы со стандартным диаметром у имплантата, устанавливаемого на уровне мягких тканей. Диаметр платформы 4,8 мм.

N – Обозначение ортопедической платформы с узким диаметром у имплантата, устанавливаемого на уровне мягких тканей. Диаметр платформы 4,0 мм.

X3 – Вид имплантата с развитой резьбой и коническим телом, предназначенного для установки в костную ткань любой плотности.

REG – Вид имплантата, имеющий параллельные стенки с конструкцией резьбы, оптимизированной для установки в кость любой плотности.

PX – Вид имплантата, с коническим телом, предназначенным в том числе для немедленной установки в лунки удаленных зубов, а также при низкой плотности костной ткани.

InLink – Обозначение дополнительного внутреннего встроенного соединения у имплантатов со стандартным диаметром и узким диаметром ортопедической платформы для прикрепления протяженных ортопедических конструкций посредством специального винта.

1 Наименование медицинского изделия (далее МИ)

Имплантат дентальный Аxiom X3, Аxiom TL в вариантах исполнения:

1. Имплантат Аxiom X3 3.4 мм x 8 мм, с винтом-заглушкой
2. Имплантат Аxiom X3 3.4 мм x 10 мм, с винтом-заглушкой
3. Имплантат Аxiom X3 3.4 мм x 12 мм, с винтом-заглушкой
4. Имплантат Аxiom X3 3.4 мм x 14 мм, с винтом-заглушкой
5. Имплантат Аxiom X3 3.4 мм x 16 мм, с винтом-заглушкой
6. Имплантат Аxiom X3 3.4 мм x 18 мм, с винтом-заглушкой
7. Имплантат Аxiom X3 4.0 мм x 6.5 мм, с винтом-заглушкой
8. Имплантат Аxiom X3 4.0 мм x 8 мм, с винтом-заглушкой
9. Имплантат Аxiom X3 4.0 мм x 10 мм, с винтом-заглушкой
10. Имплантат Аxiom X3 4.0 мм x 12 мм, с винтом-заглушкой
11. Имплантат Аxiom X3 4.0 мм x 14 мм, с винтом-заглушкой
12. Имплантат Аxiom X3 4.0 мм x 16 мм, с винтом-заглушкой
13. Имплантат Аxiom X3 4.0 мм x 18 мм, с винтом-заглушкой
14. Имплантат Аxiom X3 4.6 мм x 6.5 мм, с винтом-заглушкой
15. Имплантат Аxiom X3 4.6 мм x 8 мм, с винтом-заглушкой
16. Имплантат Аxiom X3 4.6 мм x 10 мм, с винтом-заглушкой
17. Имплантат Аxiom X3 4.6 мм x 12 мм, с винтом-заглушкой
18. Имплантат Аxiom X3 4.6 мм x 14 мм, с винтом-заглушкой
19. Имплантат Аxiom X3 5.2 мм x 6.5 мм, с винтом-заглушкой
20. Имплантат Аxiom X3 5.2 мм x 8 мм, с винтом-заглушкой
21. Имплантат Аxiom X3 5.2 мм x 10 мм, с винтом-заглушкой
22. Имплантат Аxiom X3 5.2 мм x 12 мм, с винтом-заглушкой
23. Имплантат Аxiom X3 5.8 мм x 6.5 мм, с винтом-заглушкой
24. Имплантат Аxiom X3 5.8 мм x 8 мм, с винтом-заглушкой
25. Имплантат Аxiom X3 5.8 мм x 10 мм, с винтом-заглушкой
26. Имплантат Аxiom X3 5.8 мм x 12 мм, с винтом-заглушкой
27. Имплантат Аxiom X3 6.4 мм x 6.5 мм, с винтом-заглушкой
28. Имплантат Аxiom X3 6.4 мм x 8 мм, с винтом-заглушкой
29. Имплантат Аxiom X3 6.4 мм x 10 мм, с винтом-заглушкой
30. Имплантат Аxiom X3 6.4 мм x 12 мм, с винтом-заглушкой
31. Имплантат Аxiom TL PX 3.4 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
32. Имплантат Аxiom TL PX 3.4 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
33. Имплантат Аxiom TL PX 3.4 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
34. Имплантат Аxiom TL PX 3.4 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
35. Имплантат Аxiom TL PX 3.4 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
36. Имплантат Аxiom TL PX 3.4 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
37. Имплантат Аxiom TL PX 3.4 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
38. Имплантат Аxiom TL PX 3.4 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой

39. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
40. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
41. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
42. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
43. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
44. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
45. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
46. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
47. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
48. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
49. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
50. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
51. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
52. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
53. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
54. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
55. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
56. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
57. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
58. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
59. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
60. Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
61. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 6.5 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
62. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 6.5 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
63. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 6.5 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой

64. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
65. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
66. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
67. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
68. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
69. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
70. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
71. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
72. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
73. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
74. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
75. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
76. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
77. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
78. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
79. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
80. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
81. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
82. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
83. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
84. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
85. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
86. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
87. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
88. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой

89. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
90. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
91. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
92. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
93. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
94. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
95. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
96. Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
97. Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
98. Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
99. Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
100. Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
101. Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
102. Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
103. Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
104. Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
105. Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
106. Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
107. Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
108. Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
109. Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
110. Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
111. Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
112. Имплантат Axiom TL PX 5.2 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
113. Имплантат Axiom TL PX 5.2 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой

114. Имплатат Axiom TL PX 5.2 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
115. Имплатат Axiom TL PX 5.2 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
116. Имплатат Axiom TL PX 5.2 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
117. Имплатат Axiom TL PX 5.2 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
118. Имплатат Axiom TL PX 5.2 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
119. Имплатат Axiom TL PX 5.2 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
120. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
121. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
122. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
123. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
124. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
125. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
126. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
127. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
128. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
129. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
130. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
131. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
132. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
133. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
134. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
135. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
136. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
137. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
138. Имплатат Axiom TL REG 3.4 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой

139. Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
140. Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
141. Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
142. Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
143. Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
144. Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
145. Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
146. Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
147. Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
148. Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
149. Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
150. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 6.5 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
151. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 6.5 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
152. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 6.5 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
153. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
154. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
155. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
156. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
157. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
158. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
159. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
160. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
161. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
162. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
163. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой

164. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
165. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
166. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
167. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
168. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
169. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
170. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
171. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
172. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
173. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
174. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
175. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
176. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
177. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
178. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
179. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
180. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
181. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
182. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
183. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
184. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
185. Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
186. Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
187. Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
188. Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой

189. Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
190. Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
191. Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
192. Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
193. Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
194. Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
195. Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
196. Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
197. Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
198. Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
199. Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
200. Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой
201. Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
202. Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
203. Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
204. Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
205. Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
206. Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой
207. Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой
208. Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой;

(Далее по тексту имплантаты, имплантаты Axiom).

2 Информация о производителе

ANTHOGYR SAS («Антожир САС»)

Адрес: 2237, avenue André Lasquin, 74700 Sallanches, France (Франция)

Тел.: ++33(0)4 50 58 02 37

3 Назначение

Предназначен для хирургической имплантации в альвеолярную и/или базальную кость нижней или верхней челюсти для обеспечения поддержки и удержания зубного протеза.

4 Область применения

Стоматология.

5 Потенциальный потребитель

Практикующий врач-стоматолог.

6 Показания к применению

Имплантаты Аxiom применяются для стабилизации съемных зубных протезов, а также для установки протезов при реставрации одного или нескольких зубов верхней и нижней челюстей пациентов с частичной или полной адентией для восстановления функции отсутствующих зубов. Имплантаты Аxiom ХЗ могут быть установлены при одно- или двухэтапной хирургической операции. Для Имплантатов Аxiom TL двухэтапная хирургическая операция не характерна, так как установка имплантата осуществляется не на уровне кости. В соответствующих клинических ситуациях (хорошая первичная стабильность и надлежащая окклюзионная нагрузка) возможна установка Имплантатов Аxiom с немедленной функциональной нагрузкой.

Конструкция Имплантатов Аxiom TL РХ позволяет обеспечить хорошую первичную стабильность в костной ткани низкой плотности. Данные имплантаты пригодны как для немедленной, так и для отсроченной имплантации.

7 Противопоказания

Установка имплантатов Аxiom противопоказана в следующих случаях:

Аллергические реакции или гиперчувствительность к используемым материалам: титановый сплав 3.7165.1-Ti-6AL-4V ELI.

Абсолютные противопоказания: тяжелые заболевания (опухоли, болезни сердца и т.д.), нарушения обмена веществ, некомпенсированные заболевания крови, наркотическая зависимость, алкоголизм, психозы, функциональные расстройства, ксеростомия, иммунодефицит, лейкоцитарные нарушения, получение определенных видов местной или системной терапии (прием стероидов, антикоагулянтов, химиотерапия, радиационная терапия и т.д.).

Относительные противопоказания: бруксизм, окклюзионная нагрузка, парафункциональные привычки, неблагоприятные анатомические особенности челюстной кости, неудовлетворительная гигиена полости рта, курение, недостаток мотивации пациента и неудовлетворительный контакт со специалистом, радиационное поражение

костной ткани, пародонтит с неконтролируемым течением, инфекции полости рта, воспалительные процессы в полости рта.

Местные противопоказания: избыточная резорбция и/или качество костной ткани, наличие остатков корней зубов.

Имплантаты Аxiom X3 диаметром 3,4 мм не подходят для одиночных реставраций зубов в области моляров.

8 Возможные побочные действия

Клинический результат стоматологической процедуры зависит от различных факторов. Перечисленные ниже остаточные риски и возможные побочные эффекты связаны с использованием имплантатов Аxiom и могут привести к необходимости дополнительного стоматологического лечения.

Остаточные риски:

- дополнительное лечение в стоматологической клинике;
- нарушения прикуса / жевания / фонетики;
- уплотнение костной ткани;
- повреждение кости;
- повреждение соседнего зуба / зуба-антагониста;
- дискомфорт;
- гиперплазия;
- гиперчувствительность/ аллергическая реакция;
- перелом имплантата;
- повреждение десны;
- раздражение/воспаление;
- местная или системная инфекция (в т.ч. периимплантит, периодонтит, гингивит, свищ);
- местный болевой синдром;
- более длительное время восстановления/заживления, чем ожидалось;
- потеря имплантата;
- потеря протезного компонента;
- повреждения нерва с потенциалом развития хронического болевого синдрома;
- парестезия, дизестезия;
- эстетически неудовлетворительный результат;
- вероятность превышения ожидаемой продолжительности хирургической операции;
- вероятность хирургической эксплантации имплантата;
- вероятность проглатывания/вдыхания деталей малого размера во время процедуры;
- повторное посещение стоматологической клиники;
- перфорация пазух носа.

Побочные эффекты:

- отек;
- местное воспаление;
- кровоподтек;
- резорбция верхнечелюстного / нижнечелюстного гребня альвеолярного отростка;
- местная инфекция;

- незначительное кровотечение.

9 Предупреждения и меры предосторожности

Имплантация является сложной стоматологической процедурой. Ошибки в ее выполнении могут привести к отторжению имплантата и/или разрушению опорной костной ткани.

Для выполнения имплантации необходимы надлежащая подготовка и квалификация, а также наличие знания о способах осуществления хирургических вмешательств при использовании изделий Anthogyr.

Клиническое применение:

- Работу с изделиями должны осуществлять только практикующие стоматологи, прошедшие углубленную подготовку в области зубной имплантологии. Необходимо следовать инструкциям хирургического руководства для соответствующего типа имплантата. Эти документы доступны на сайте straumann.ru/IFU.

- Одноразовые изделия: не использовать повторно и не подвергать повторной стерилизации. Риск инфицирования и нарушения функциональных поверхностей.

- Важно провести доклиническую оценку и составить план лечения с учетом анатомических ограничений реставрации.

- Имплантаты поставляются в стерильном виде. Не используйте изделие с повреждённой упаковкой и истёкшим сроком годности.

- Имплантаты поставляются со своим собственным винтом-заглушкой/ заглушкой. Это изделие совместимо только с имплантатом, находящимся в той же упаковке. Использование этого изделия для каких-либо других целей запрещено.

- Имплантаты должны использоваться совместно только с инструментами и ортопедическими компонентами компании Anthogyr. Обязательно используйте только оригинальные изделия и компоненты Anthogyr с соответствующим соединением для зубной реставрации Anthogyr: риск травмы, повреждения и дисфункции имплантата, риск повреждения компонентов или аксессуара.

- Размеры и тип имплантата: см. этикетку. Для обеспечения поддержки и адекватного распределения нагрузки необходимо установить достаточное количество имплантатов. Диаметр каждого имплантата должен соответствовать механической нагрузке, которую необходимо поддерживать.

- Необходимо спланировать безопасное пространство, достаточное для преодоления анатомических препятствий, особенно с учетом припусков на сверление и апикального положения имплантата в кости.

- При работе с имплантатом Axiom следует использовать только оригинальные компоненты и инструменты Anthogyr с соответствующим соединением. Протезные компоненты различных систем имплантатов Axiom не являются взаимозаменяемыми.

- Установка имплантата в костное ложе должна осуществляться с помощью соответствующего инструмента с крутящим моментом, не превышающим рекомендуемые значения. Слишком высокий крутящий момент затяжки имплантата может привести к повреждению имплантата, перелому или некрозу кости. Открутите и затем снова закрутите имплантат, чтобы ограничить момент затяжки, если он становится слишком высоким.

- Не используйте повреждённые изделия. Перед использованием изделий убедитесь, что они находятся в хорошем состоянии (отсутствуют видимые повреждения, отсутствуют дефекты покрытия поверхности, отсутствуют дефекты и повреждения резьбы).

- Пациент должен быть проинформирован хирургом о возможных побочных эффектах и осложнениях. Пациент должен согласиться на регулярное медицинское наблюдение и обратиться к своему врачу в случае непредвиденных изменений в работе зубного имплантата. Внимание пациента должно быть обращено на необходимость регулярной гигиены полости рта.

- При эксплуатации необходимо соблюдать правила асептического обращения. При извлечении имплантата не допускается прикасаться к его внешней поверхности. При обращении с имплантатом проявлять крайнюю осторожность, исключить выпадение имплантата в ротовой полости пациента. Имплантат может перемещаться после вскрытия тубы и извлечения ограничителя. При открывании тубы обязательно держать ее в вертикальном положении, горловиной вверх.

- Максимально допустимый крутящий момент для имплантата: 80 Н*см.

- Максимально допустимый крутящий момент для винта-заглушки: 10 Н*см.

10 Сведения о безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ)

Для оценки систем зубных имплантатов, были проведены доклинические испытания и моделирование МРТ. Неклинические испытания показывают, что эти изделия подходят для МРТ. Пациента с имплантатом можно безопасно сканировать в системе МРТ при следующих условиях:

- Только статическое магнитное поле 1,5 Тл и 3 Тл;
- Максимальный пространственный градиент магнитного поля 4000 Гс/см (40 Т/м);
- Максимально допустимые параметры МР-системы – усредненная удельная скорость поглощения (SAR) всего организма составляет 2 Вт/кг и среднюю SAR головы 3,2 Вт/кг в течение 15 минут сканирования (т.е. последовательность импульсов) в нормальном рабочем режиме.

Ожидается, что в определенных условиях сканирования имплантаты будут давать максимальное повышение температуры на 4,9 °С после 15 минут непрерывного сканирования (т.е. на последовательность импульсов).

В неклинических испытаниях артефакт на снимке, вызванный имплантатами, простирается примерно на 10 мм от этого изделия при визуализации с помощью последовательности импульсов градиентного эха и системы МР 3 Тл.

11 Общее описание МИ

Имплантат Аxiom представляет собой изделие линейно вытянутой формы с внешней резьбой. Изделие имеет отверстие с внутренней резьбой, обеспечивающее соединение с инструментом для установки и зубным протезом.

В верхней части имплантата Axiom TL PX/REG имеется обратный конический воротник (шейка) для поддержки мягких тканей, сохранения кортикального слоя кости и содействия росту альвеолярной кости.

Имплантаты Axiom X3 доступны в различных размерах:

Диаметр: Ø 3,4 мм, Ø 4,0 мм, Ø 4,6 мм, Ø 5,2 мм, Ø 5,8 мм и Ø 6,4 мм.

Длина в зависимости от диаметра:

- Ø 3,4 мм: доступно 6 вариантов длины от 8 мм до 18 мм;
- Ø 4,0мм: доступно 7 вариантов длины от 6,5 мм до 18 мм;
- Ø 4,6мм: доступно 5 вариантов длины от 6,5 мм до 14 мм;
- Ø 5,2мм: доступно 4 вариантов длины от 6,5 мм до 12 мм;
- Ø 5,8мм: доступно 4 вариантов длины от 6,5 мм до 12 мм;
- Ø 6,4мм: доступно 4 вариантов длины от 6,5 мм до 12 мм.

Тип соединения имплантата: 12-и - градусное, коническое, трехгранное направленное соединение.

Имплантаты Axiom TL REG и Axiom TL PX доступны в различных размерах:

Диаметр: Ø 3,4 мм, Ø 4,0 мм, Ø 4,6 мм и Ø 5,2 мм.

Длина в зависимости от диаметра:

- Ø 3,4 мм: доступны 5 вариантов длины от 8 мм до 16 мм;
- Ø 4,0 мм: доступны 6 вариантов длины от 6,5 мм до 16 мм;
- Ø 4,6 мм: доступны 5 вариантов длины от 6,5 мм до 14 мм;
- Ø 5,2 мм: доступны 4 варианта длины от 6,5 мм до 12 мм.

Доступны 2 платформы:

- N для узкого диаметра 4,0 мм;
- R для обычного диаметра 4,8 мм.

Доступны 3 варианта высоты шейки:

- шейка высотой 1,5 мм;
- шейка высотой 2,5 мм;
- шейка высотой 3,5 мм.

Тип соединения имплантата: InLink и трехгранное направленное соединение M1.6.

Общий внешний вид медицинского изделия представлен на рисунке 1.

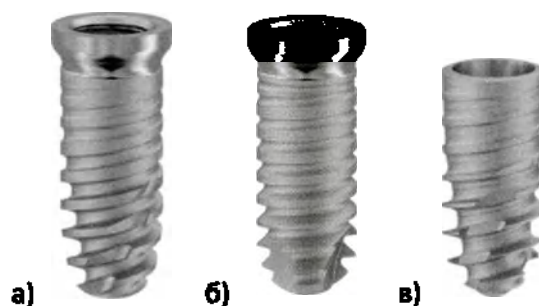


Рисунок 1 – Общий вид медицинского изделия: а) Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой; б) Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой; в) Имплантат Axiom X3 3.4 мм x 8 мм, с винтом-заглушкой.

Все имплантаты поставляются совместно с винтом-заглушкой. Винт-заглушка представляет собой изделие в виде винта с внешней резьбой и шляпкой. На шляпке имеется углубление – конструктивный элемент для передачи крутящего момента под соответствующий инструмент. Винт-заглушка и заглушка представлены на рисунке 2.



Рисунок 2 – а) Винт-заглушка для имплантата Axiom X3; б) Винт-заглушка для имплантата Axiom TL REG;

Винты-заглушки для имплантатов Axiom TL обладают лазерной маркировкой, располагаемой на верхней части шляпки.

Лазерная маркировка для винта-заглушки TL указывает диаметр платформы: символ N – принадлежность к платформе с диаметром 4,0 мм; символ R – принадлежность к платформе с диаметром 4,8 мм; символ TL указывает, что компонент относится к линейке изделий Axiom TL.

12 Технические характеристики

Таблица 1. Технические характеристики.

Наименование изделия	Характеристики
Имплантат Аxiom X3 3.4 мм x 8 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм $\pm$ 0,05 мм Длина имплантата: 8 мм $\pm$ 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,141 г $\pm$ 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм $\pm$ 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм $\pm$ 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г $\pm$ 5%
Имплантат Аxiom X3 3.4 мм x 10 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм $\pm$ 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм $\pm$ 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,187 г $\pm$ 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм $\pm$ 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм $\pm$ 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г $\pm$ 5%
Имплантат Аxiom X3 3.4 мм x 12 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм $\pm$ 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм $\pm$ 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,236 г $\pm$ 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм $\pm$ 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм $\pm$ 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г $\pm$ 5%
Имплантат Аxiom X3 3.4 мм x 14 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм $\pm$ 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм $\pm$ 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,285 г $\pm$ 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм $\pm$ 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h

	Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 3.4 мм х 16 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,334 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 3.4 мм х 18 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 18,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,375 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 4.0 мм х 6.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,149 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 4.0 мм х 8 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,179 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм

	Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 4.0 мм x 10 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,246 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 4.0 мм x 12 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,311 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 4.0 мм x 14 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,377 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 4.0 мм x 16 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,440 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%

Имплантат Аxiom X3 4.0 мм х 18 мм, с винтом- заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 18,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,509 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 4.6 мм х 6.5 мм, с винтом- заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,207 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 4.6 мм х 8 мм, с винтом- заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,266 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 4.6 мм х 10 мм, с винтом- заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,351 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%

Имплантат Аxiom X3 4.6 мм x 12 мм, с винтом- заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,438 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 4.6 мм x 14 мм, с винтом- заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,524 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 5.2 мм x 6.5 мм, с винтом- заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,223 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 5.2 мм x 8 мм, с винтом- заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,288 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%

Имплантат Аxiom X3 5.2 мм x 10 мм, с винтом- заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,389 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 5.2 мм x 12 мм, с винтом- заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,473 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 5.8 мм x 6.5 мм, с винтом- заглушкой	Диаметр имплантата: 5,80 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,283 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 5.8 мм x 8 мм, с винтом- заглушкой	Диаметр имплантата: 5,80 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,371 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%

Имплантат Аxiom X3 5.8 мм x 10 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,80 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,495 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 5.8 мм x 12 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,80 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,616 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 6.4 мм x 6.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 6,40 мм ± 0,10 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,325 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 6.4 мм x 8 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 6,40 мм ± 0,10 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,414 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%

Имплантат Аxiom X3 6.4 мм x 10 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 6,40 мм ± 0,10 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,548 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom X3 6.4 мм x 12 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 6,40 мм ± 0,10 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Sa S-F 1,65 – 2,75 Sa S-L 0,75 – 1,15 Sz не более 8,5 Масса имплантата: 0,692 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 2,73 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M1.6x0.35-4h Длина винта-заглушки: 5,95 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,4 мкм Масса винта: 0,065 г ± 5%
Имплантат Аxiom TL PX 3.4 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,247 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Аxiom TL PX 3.4 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,281 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Аxiom TL PX 3.4 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм,	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм

высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,317 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,262 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,310 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,351 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,300 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм

	Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,333 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,370 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,317 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,363 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм

	Масса имплантата: 0,404 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,353 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,386 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,423 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,370 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%

Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,416 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,457 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,405 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,439 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,475 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,423 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,469 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,510 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,458 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%

Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,492 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,528 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,476 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,522 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 3.4 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,563 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 6.5 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,252 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 6.5 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,281 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 6.5 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,319 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,267 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%

Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,310 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,353 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,318 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,351 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,389 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,335 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,379 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,422 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,393 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%

Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,424 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,463 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,410 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,454 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,497 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,468 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,499 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,05 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,538 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,485 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%

Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,528 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,05 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,572 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,543 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,05 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,574 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,05 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,1 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,612 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,559 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,604 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,647 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,618 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%

Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,648 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,687 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,634 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,678 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.0 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,721 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,355 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,407 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,455 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,430 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%

Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,482 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,530 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,530 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,582 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,631 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,631 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,683 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,731 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,731 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%

Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,783 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 4.6 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,831 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 5.2 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,458 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 5.2 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,513 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 5.2 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,555 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 5.2 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,611 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 5.2 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,686 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 5.2 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,746 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL PX 5.2 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,816 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%

Имплантат Axiom TL PX 5.2 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,872 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,257 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,290 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,327 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,275 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,319 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,362 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,321 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,355 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%

Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,391 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,339 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,383 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,426 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,385 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,419 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,455 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,402 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,449 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%

Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,491 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,450 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,483 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,520 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,466 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,513 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,555 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,514 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,548 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%

Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,584 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,531 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,578 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 3.4 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 3,40 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,620 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 6.5 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,269 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 6.5 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,305 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 6.5 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,344 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,285 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,333 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%

Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,376 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,335 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,370 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 8 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,409 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,351 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,397 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,441 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,423 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,457 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%

Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 10 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,496 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,438 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,484 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,528 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,510 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,544 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 12 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,583 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,525 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,571 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%

Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,615 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,597 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,631 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 14 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,670 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,612 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,658 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,702 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,684 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,718 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%

Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 16 мм, платформа N 4.0 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,757 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,00 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,063 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,699 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,745 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.0 мм x 16 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,00 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 16,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,789 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,377 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,429 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,478 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,467 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,519 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%

Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,568 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,585 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,638 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,687 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,705 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,757 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,806 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: Не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,823 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,874 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%

Имплантат Axiom TL REG 4.6 мм x 14 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 3.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 4,60 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 14,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 3,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,923 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,481 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 6.5 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 6,5 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,534 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,599 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 8 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 8,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,651 г ± 5%

	Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,750 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 10 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 10,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,805 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 1.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 1,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,910 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%
Имплантат Axiom TL REG 5.2 мм x 12 мм, платформа R 4.8 мм, высота десны 2.5 мм, с винтом-заглушкой	Диаметр имплантата: 5,20 мм ± 0,05 мм Длина имплантата: 12,0 мм ± 0,1 мм Высота шейки: 2,50 мм ± 0,05 мм Шероховатость имплантата: Ra 1,5-2 мкм Шероховатость шейки имплантата: не более Ra 0,2 мкм Масса имплантата: 0,959 г ± 5% Диаметр винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Резьба винта-заглушки: M2.8x0.4-4h Длина винта-заглушки: 4,80 мм ± 0,05 мм Шероховатость винта: не более Ra 0,8 мкм Масса винта: 0,070 г ± 5%

13 Сведения о стерильности и кратности применения

МИ поставляется стерильным. Неповрежденная стерильная упаковка защищает стерильные изделия от внешних воздействий, что при правильном хранении обеспечивает стерильность до истечения срока годности. При извлечении изделия из стерильной упаковки необходимо соблюдать правила асептического обращения. Стерильную упаковку не следует открывать до непосредственного использования изделия. Изделия с поврежденной стерильной упаковкой использовать нельзя.

Компания Anthogut не несет никакой ответственности за стерилизованные МИ, независимо от того, кто провел повторную стерилизацию или каким способом. Ранее использованные МИ ни при каких обстоятельствах не должны использоваться повторно. Если оригинальная упаковка повреждена, то компания Anthogut не принимает ее содержимое обратно.

Запрещается использовать изделия после истечения указанного срока годности. МИ необходимо хранить в оригинальной упаковке в сухом помещении, защищенной от попадания прямых солнечных лучей и при комнатной температуре. Перед установкой имплантата необходимо проверить целостность стерильной упаковки. Если стерильная упаковка повреждена, то МИ не может считаться стерильным.

МИ стерилизуются гамма-облучением при минимальной дозе 25 кГр и максимальной дозе 40 кГр. Уровень обеспечения стерильности (SAL) 10^{-6} был утвержден в соответствии с ISO 11137 «Стерилизация медицинских изделий – Требования к валидации и текущему контролю – Радиационная стерилизация».

МИ однократного применения. Нельзя использовать повторно.

14 Подготовка к работе с МИ

Перед непосредственным применением изделия необходимо провести предоперационное планирование и подготовку костного ложа имплантата согласно хирургическому протоколу (определяется стоматологом/пользователем).

Тип, диаметр и длина имплантата, диаметр и высота платформы, а также число используемых имплантатов и их размещение определяются заранее с учетом анатомии и особенностей полости рта пациента.

Само изделие не требует предварительной подготовки к работе и может применяться сразу после извлечения из упаковки.

Перед применением заранее подготовьте все необходимые инструменты и расходные материалы. Они должны быть легко доступны для быстрого и своевременного применения. Пользователь должен применять необходимые средства защиты согласно утверждённым в медицинских учреждениях правилам санитарии.

15 Работа с МИ

15.1 Извлечение имплантата из упаковки

Все манипуляции должны проводиться таким образом, чтобы избежать прямого контакта с внешней поверхностью имплантата. Выполняйте свои действия так, чтобы избежать риска падения имплантата в ротовую полость пациента.

Упаковка имплантата состоит из 3-х элементов:



- 1) Картонная коробка защищает его во время транспортировки.
- 2) Герметичный блистер, позволяющий сохранить стерильность.
- 3) Первичная упаковка (туба) для сохранения имплантата.

Расположите картонную коробку на столе, откройте и извлеките блистерную упаковку.


Откройте блистер, не касаясь его внутренней части. Аккуратно опустите первичную упаковку на стерильную площадку.



Открывайте тубу только одной рукой. После открытия тубы имплантат становится подвижным. При работе с тубой обязательно держите ее вертикально, чтобы доступ к имплантату был направлен вверх.

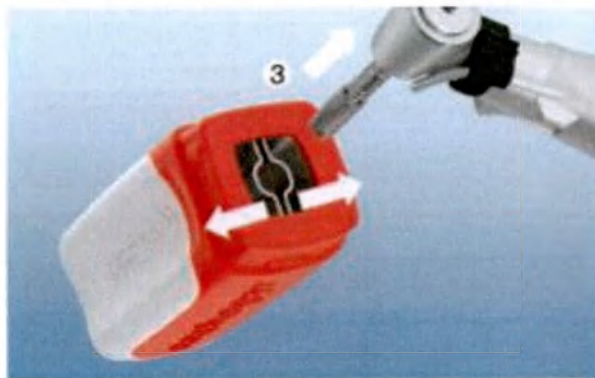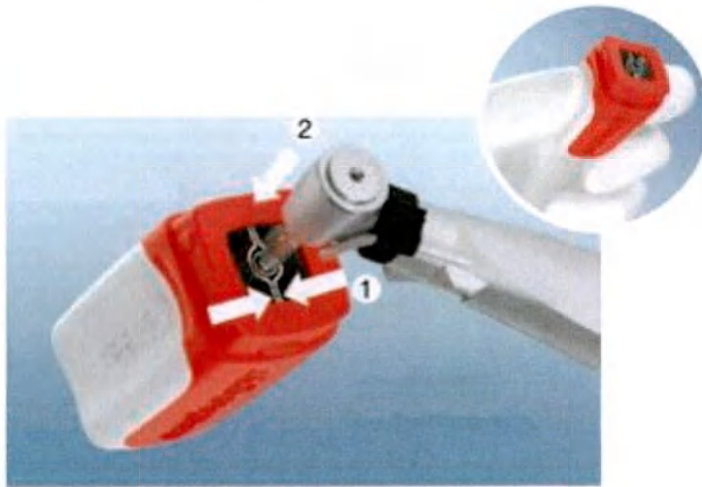

- 1) Нажмите на боковые стенки тубы, чтобы зафиксировать имплантат.
- 2) Соедините и захватите имплантат с помощью углового наконечника (или ручного ключа).
- 3) Разожмите боковые стенки тубы, чтобы освободить имплантат. Извлеките его.

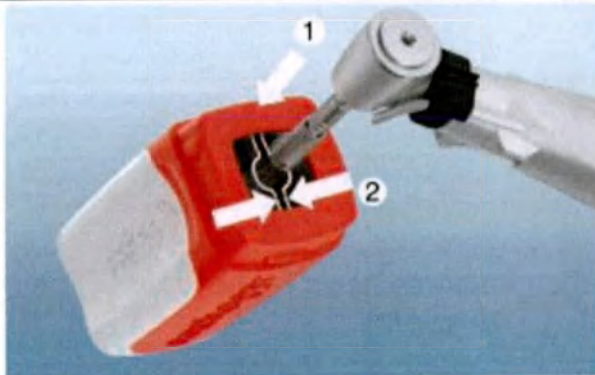

Имплантат можно повторно зафиксировать в упаковке, например если требуется перемещение в время операции.

- 1) Установите имплантат в тубу между пластинами.
- 2) Нажмите на боковые стенки тубы, чтобы зафиксировать имплантат.
- 3) Отсоедините инструмент от имплантата.

15.2 Установка имплантата Axiom X3

Проверка фиксации инструмента в имплантате.

Граница лазерной маркировки указывает на то, что инструмент правильно установлен в имплантате и, таким образом, гарантирует правильную фиксацию имплантата.



Установка с помощью углового наконечника:

Отрегулируйте скорость углового наконечника. Вкрутите имплантат пациенту в ложе имплантата на нужную глубину.

Рекомендуемая скорость вращения имплантата:

Axiom X3 – 15 об/мин;

Axiom TL REG – 25 об/мин;

Axiom TL PX – 15 об/мин.

Регулярно проверяйте момент затяжки, чтобы не превышать 80 Н*см.

Не стесняйтесь откручивать и закручивать имплантат во время установки, чтобы уменьшить усилие затяжки.


Установка с помощью ручного инструмента:

С хирургическим трещоткой:


Вручную затяните имплантат пациенту в ложе имплантата с помощью динамометрического ключа и ключа-трещётки. Затягивайте, пока не будет достигнута желаемая глубина.

Регулярно проверяйте момент затяжки, чтобы не превышать 80 Н*см.

Не стесняйтесь откручивать и закручивать имплантат во время установки, чтобы уменьшить усилие затяжки.

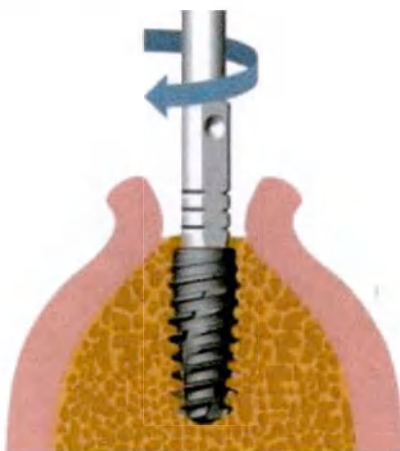

Имплантат Axiom X3

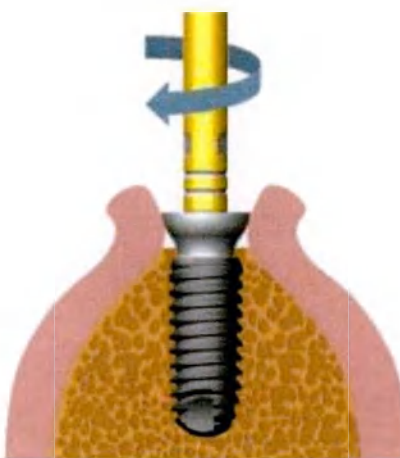


Имплантат Axiom TL

15.3 Субкрестальное положение имплантата


Хирургический протокол для имплантатов Axiom X3 и Axiom TL включает стандартное субкрестальное позиционирование имплантата на 0,5 мм в зависимости от клинических условий. В хирургическом протоколе Axiom X3 и Axiom TL учитывается апикальное рассверливание на 0,5 мм.

Инструменты для установки имплантата имеют градуировку, чтобы облегчить вертикальное позиционирование имплантата.

Примечание: Глубина сверления = длина имплантата + 1 мм (0,5 мм апикальный резерв + 0,5 мм ниже гребня).

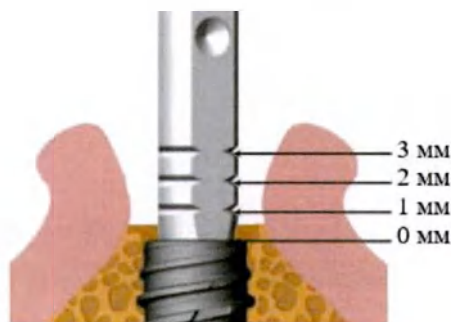

Имплантат Axiom X3

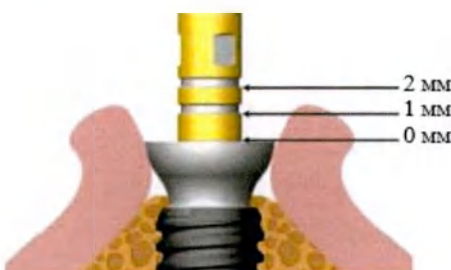

Имплантат Axiom TL

Позиционирование десны для Axiom TL:

Выбор высоты шейки имплантата осуществляется в соответствии с субкрестальным расположением и толщиной десны, так чтобы платформа имплантата находилась между -0,5 мм и -1 мм от уровня десны, в соответствии с клиническими соображениями.

15.4 Ориентация имплантата

Инструменты для установки имплантата имеют 3 грани, каждая из которых снабжена визуальным идентификатором, соответствующим трехгранному соединению.

В конце заворачивания имплантата сориентируйте один из идентификаторов на поверхности инструмента вестибулярно (щёчно) для получения правильной ортопедической позиции компонента реставрации


Имплантат Axiom X3



Имплантат Axiom TL



15.5 Установка винта-заглушки

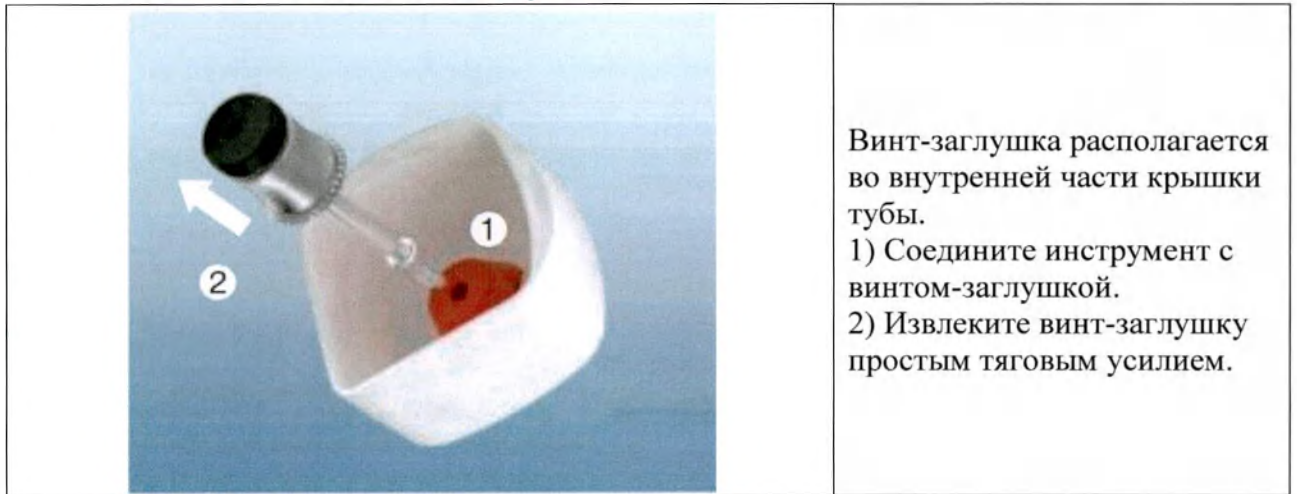

Винт-заглушка располагается во внутренней части крышки тубы.

- 1) Соедините инструмент с винтом-заглушкой.
- 2) Извлеките винт-заглушку простым тяговым усилием.

Вручную затяните винт в имплантате с моментом затяжки не более 10 Н*м без усилия.

Зашейте раневое отверстие над винтом-заглушкой для стимулирования интеграции.

16 Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие

Таблица 2. Перечень стандартов.

Стандарт	Наименование
Соответствие международным стандартам	
NF EN ISO 14971:2019	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
Meddev 2.7.1	Клиническая оценка: Руководство для изготовителей и нотифицированных органов.
NF EN 62366-1:2015	Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности
ISO 14801:2016	Стоматология. Имплантаты. Усталостные испытания для внутрикостных стоматологических имплантатов
NF EN 1642:2012	Медицинские изделия для стоматологии - Зубные имплантаты
NF EN 15223-1:2021	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации
EN ISO 20417:2021	Медицинские изделия - Информация, предоставляемая производителем
NF EN 556-1:2001	Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории "стерильные". Часть 1. Требования к медицинским изделиям, подлежащим финишной стерилизации

Стандарт	Наименование
ISO 19227:2018	Чистота ортопедических имплантатов. Общие требования
NF EN ISO 11137-1:2015	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
NF EN ISO 11137-2:2015	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 2 Установление стерилизующей дозы
NF EN ISO 11137-3:2017	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 3. Руководство по вопросам дозиметрии
EN ISO 11737-1:2018	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продукции»
EN ISO 11737-2:2019	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 2. Испытания на стерильность, проводимые при валидации процессов стерилизации
EN ISO 14937:2009	Стерилизация медицинской продукции. Общие требования к определению характеристик стерилизующего агента и к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
NF EN ISO 11607-1:2020	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам
NF EN ISO 11607-2:2020	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки
ASTM F136	Стандартные технические условия на кованый сплав титан-балюминий-4ванадий ELI (ультрамелкозернистый)
ASTM F67	Имплантаты для хирургии. Нелегированный титан
ISO 5832-3:2021	Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. Часть 3. Деформируемый сплав на основе титана, 6-алюминия и 4-ванадия
ISO/TS 10974:2018	Оценка безопасности магнитно-резонансной томографии у пациентов с активным имплантируемым медицинским изделием
ASTM F2052	Стандартный метод испытаний для измерения магнитно-индуцированной силы смещения медицинских устройств в среде магнитного резонанса
ASTM F2213	Стандартный метод испытаний для измерения крутящего момента, вызванного магнитным полем, на

Стандарт	Наименование
	медицинских устройствах в условиях магнитного резонанса
ASTM F2182	Стандартный метод испытаний для измерения радиочастотного нагрева на пассивных имплантатах или рядом с ними во время магнитно-резонансной томографии
ASTM F2119	Стандартный метод тестирования для оценки артефактов МР-изображения от пассивных имплантатов
NF EN ISO10993-1:2020	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования
NF EN ISO 10993-3:2014	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию
NF EN ISO 10993-5:2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
NF EN ISO 10993-6:2016	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации
NF EN ISO 10993-10:2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
NF EN ISO 10993-11:2018	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия
NF EN ISO 10993-17:2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 17. Установление пороговых значений для вымываемых веществ
NF EN ISO 10993-18:2020	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 18. Исследование химических свойств материалов
Соответствие национальным стандартам	
ГОСТ ISO 14971-2021	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.
ГОСТ ISO 13485-2017	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования.
ГОСТ Р МЭК 62366-1-2021	Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности.
ГОСТ Р ИСО 14801-2012	Стоматология. Имплантаты. Усталостные испытания для внутрикостных стоматологических имплантатов.
ГОСТ ISO 11607-1-2018	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам.

Стандарт	Наименование
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ ISO 11137-1-2011	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий.
ГОСТ ISO 11137-2-2011	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы.
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.
ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными.
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.
ГОСТ 31214-2016	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность.
ГОСТ ISO 10993-4-2020	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью.
ГОСТ ISO 10993-5-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.
ГОСТ ISO 10993-11-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия.
ГОСТ ISO 10993-12-2015	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы.

17 Условия эксплуатации, хранения и транспортировки изделий

Условия эксплуатации

Медицинское изделие эксплуатируется в ротовой полости организма, при температуре от +32°C до +42°C.

Установка медицинского изделия в ротовую полость должна проводиться в стоматологических кабинетах лечебно-профилактических учреждений, в стандартных для таких кабинетов условиях, представленных в таблице 4.

Таблица 4. Условия эксплуатации

Характеристика	Значение
Температура	+18°C - +25°C
Влажность	От 40% до 60%
Атмосферное давление	84 - 106,7 кПа

Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в сухом месте в оригинальной упаковке при комнатной температуре и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

Рекомендуемые значения при длительном хранении:

Температура: 15 - 30°C.

Влажность: не более 60%.

Атмосферное давление: 84 - 106,7 кПа.

Транспортировка может осуществляться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта. Не допускается воздействие влаги и прямых солнечных лучей при транспортировании.

Транспортировка возможна при температуре от -50 до +50°C, влажности не более 80% и атмосферном давлении 84 - 106,7 кПа.

18 Расшифровка символов маркировки

Таблица 4. Расшифровка символов на маркировке.

Символ	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
REF	Номер по каталогу (артикул)
LOT	Код партии
STERILE R	Радиационная стерилизация
	Обратитесь к инструкции по применению
	Запрет на повторное применение
	Не стерилизовать повторно
	Использовать до...
	Не использовать при повреждении упаковки
	Не допускать воздействия солнечного света
	Стерильная барьерная система
RxOnly	Федеральное законодательство США ограничивает продажу данного изделия для распространения только стоматологам или по заказу сертифицированного стоматолога
CE	Медицинское изделие соответствует Европейской директиве 93/42/CEE
MD	Медицинское изделие

19 Сведения об утилизации

Использованные и извлечённые из ротовой полости пациента изделия должны быть очищены от всевозможных биологических материалов и надлежащим образом утилизированы в соответствии с правилами утилизации СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б. Процедура утилизации осуществляется в соответствии с требованиями медицинских учреждений.

Изделия с поврежденной упаковкой и ранее не использованные должны быть надлежащим образом утилизированы в соответствии с правилами утилизации СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А. Процедура утилизации осуществляется в соответствии с требованиями медицинских учреждений.

Утилизация упаковочных материалов осуществляется в соответствии с применимыми в медицинских учреждениях правилами сбора и обработки отходов.

В случае возникновения вопросов необходимо связаться с местными муниципальными органами, ответственными за утилизацию отходов.

Уничтожение должно осуществляться организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральными законами, с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды, при использовании методов, согласованных с территориальными органами, ответственными за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

20 Срок годности

МИ прошло испытание на срок годности в размере 5 лет при ускоренном старении и в режиме реального времени, что демонстрирует стабильность изделия и надёжность упаковки.

Срок годности, гарантийный срок хранения – 5 лет при неповрежденной упаковке в надлежащих условиях хранения.

Только для одноразового применения.

21 Клиническая эффективность

Клиническая оценка проводилась компанией Anthogyr методом анализа технической и эксплуатационной документации и с помощью сравнения медицинского изделия с аналогичными изделиями, представленными на рынке, а также методом литературного обзора по:

- характеристикам,
- контролю за инцидентами, связанными с использованием медицинских изделий для изделия Имплантат дентальный Axiom X3, Axiom TL в вариантах исполнения, и эквивалентных изделий,
- клиническим случаям.

Изделия разработаны и изготовлены для обеспечения безопасности пациента и пользователей при использовании в нормальных условиях эксплуатации и по заявленным показаниям.

Отчет и анализ рисков демонстрируют, что использование изделий не сопряжено с каким-либо чрезмерным риском для пациента при условии анализа практикующим врачом преимуществ, связанных со здоровьем пациента, медицинским и хирургическим анамнезом.

В заключении клинического исследования было продемонстрировано, что «Имплантат дентальный Axiom X3, Axiom TL в вариантах исполнения», производства компании Anthogyr SAS, и аналогичные изделия других производителей имеют положительное соотношение выгода/риск.

22 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок годности и хранения изделий составляет 5 лет с даты производства медицинского изделия и обусловлен возможностью обеспечения гарантированного уровня стерильности в течение данного срока.

Перед использованием изделия, выведенного на рынок компанией Anthogyr, стоматолог или зубной техник должен тщательно изучить следующие рекомендации, предупреждения и инструкции, а также доступную информацию, касающуюся изделия (например, публикации, касающиеся изделия, материалы по хирургической технике, инструкцию по применению).

Компания Anthogyr не несет ответственности за осложнения, возникшие в результате использования данного изделия в целях, не соответствующих указанным, а также в результате несоблюдения хирургической техники или принятия неверных решений, выбора продукта и в связи подобными ситуациями вне контроля компании Anthogyr.

Производитель гарантирует качество изделий при условии их применения в соответствии с рекомендациями.

Компания Anthogyr предоставляет гарантийные обязательства с учетом требований местного законодательства.

При подаче рекламации клиенту следует обратиться к местному представителю компании Anthogyr, который инициирует внутренний процесс работы с рекламациями и ответами на них.

23 Рекламации

Контактные данные для обращения по вопросам, связанным с эксплуатацией, техническим обслуживанием, качеством и соответствием изделий нормативным требованиям на территории Российской Федерации:

Общество с ограниченной ответственностью "Штрауманн" (ООО "Штрауманн"),
Российская Федерация.

Юридический адрес: Российская Федерация, 119571 г. Москва, Ленинский проспект, д.119А.

Контактный телефон: +7 (495)1397476

Электронный адрес: info.ru@straumann.com

/Логотип: Anthogyr/

[Штамп: Нижеподписавшийся
Г-н ГРАНЖ, член товарищества
нотариусов «Монблан Оффис»
в Салланше (От-Савуа),
свидетельствует, что
вышерасположенная подпись
была выполнена в моем
присутствии г-ном ДЮТИЛЬ]

/подпись/

[Круглая гербовая
печать:

*Г-н Бенуа
ГРАНЖ,
Нотариус*

74700
САЛЛАНШ,
улица Пеллисье,
333]


[Штамп: Антожир

АО с капиталом 1.254.040 евро
74700, САЛЛАНШ, авеню Андре Лакин, 2237
Тел.: (33) 04 50 58 02 37 – Факс (33) 04 5093 78 60
код СИРЕТ 605 620 442 00034 КПП 3250А]

Инструкция по применению медицинского изделия

Имплантат дентальный Аxiom X3, Аxiom TL в вариантах исполнения

Перевод данного текста выполнен переводчиком Кинах Валентиной Петровной.

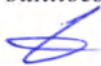

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого июля две тысячи двадцать третьего года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Кинах Валентины Петровны.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-и/77-2023-42-754

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Ф.А. Квитко

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 81 лист(а)(ов)

Нотариус

