

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ВИТА»



Чаус Н.Н.
2023 г.

ТУМБА МЕДИЦИНСКАЯ
по ТУ 32.50.30-002-48837523-2019

Инструкция по применению
ПТИС.324514.001 И

г. Владивосток

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 2 из 52

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1 Назначение и условия применения.....	4
1.2 Показания	4
1.3 Противопоказания	4
1.4 Побочные эффекты.....	4
1.5 Меры предосторожности	4
1.6 Принцип действия и конструкция тумбы.....	5
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	21
2.1 Основные параметры и характеристики.....	21
2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям	25
2.3 Требования к надежности.....	31
2.4 Комплектность.....	31
2.5 Маркировка	32
2.6 Упаковка.....	33
3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	34
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	35
4.1 Эксплуатационные ограничения	35
4.2 Подготовка к эксплуатации	35
4.3 Порядок работы с изделием	35
5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ	36
6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	37
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	37
8 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	37
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	38
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	39
11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	40
12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	41
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.....	43
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	45
Лист регистрации изменений	52

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 3 из 52

Настоящая инструкция распространяется на Тумбу медицинскую (далее – Тумба) и представляет собой документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках тумбы, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, хранения, обслуживания и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

 Информация, важная для безопасного применения тумбы отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 К эксплуатации допускается медицинский персонал и пациенты, детально изучившие настоящую инструкцию по применению.

 **ВНИМАНИЕ! Модификация изделия не допускается!**

 Ремонт изделия может осуществляться только квалифицированным специально обученным персоналом сервисных центров.

По всем вопросам, касающимся использования тумбы, необходимо обращаться к изготовителю:

ООО «ВИТА», 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206
 Тел.: 8 423 279-59-49
 E-mail: vita@vita-vdk.ru

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 4 из 52

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и условия применения

Тумба предназначена для использования в специальных медицинских помещениях (манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения) для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.

Сфера применения: в условиях лечебно-профилактических учреждений.

В зависимости от потенциального риска применения тумба относится к классу 1 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям тумба относится к виду УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации тумба относится к группе 1; тумба передвижная относится к группе 3 по ГОСТ Р 50444.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации тумба относится к классу Г по ГОСТ Р 50444.

В приложении Б указаны сведения в части специальных медицинских помещений, назначения и размещаемых медицинских изделий для каждого варианта исполнения.

1.2 Показания

Организация хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.

1.3 Противопоказания

Возможна индивидуальная непереносимость материала.

1.4 Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящей инструкции по применению, показаний и противопоказаний.

1.5 Меры предосторожности

Внимание!

- Используйте тумбу только в соответствии с данной инструкцией.
- Уход за тумбой осуществлять в соответствии с данной инструкцией.
- Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за тумбой.
- Не следует ставить на поверхность тумбы горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
- Не допускается ударов жесткими предметами.
- Не облокачиваться на передвижную тумбу, не использовать в качестве опоры.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 5 из 52

1.6 Принцип действия и конструкция тумбы

Тумба представляет собой предмет мебели с прямоугольным корпусом, высота которого не превышает уровня середины груди человека среднего роста, с дверями, полками, выдвижными ящиками и без них, который используется для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов.

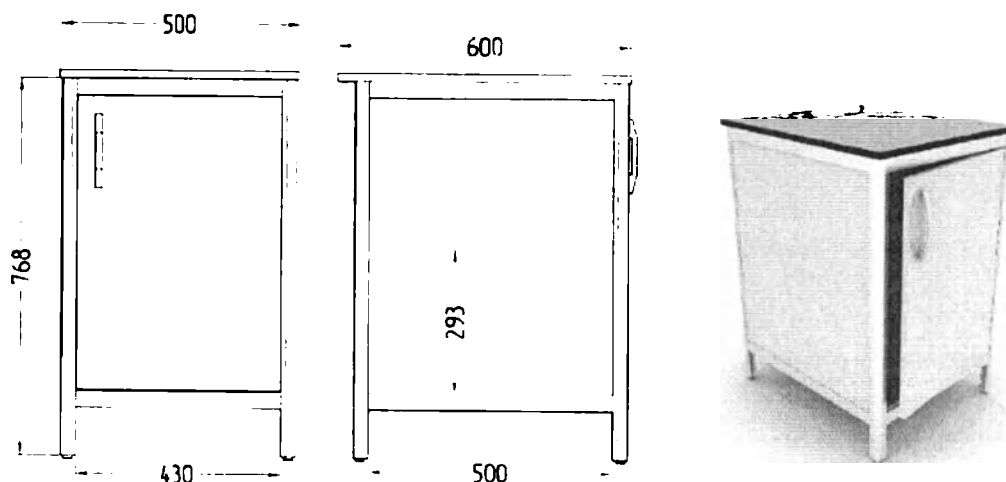


Рисунок 1 - Тумба медицинская с дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-001)

Таблица 1 - Размеры тумбы медицинской с дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-001)

Размеры, мм	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Максимальная высота тумбы	Минимальная высота тумбы	Полка 1 шт.	
					Ширина	Глубина
	500	600	830	800	450	510

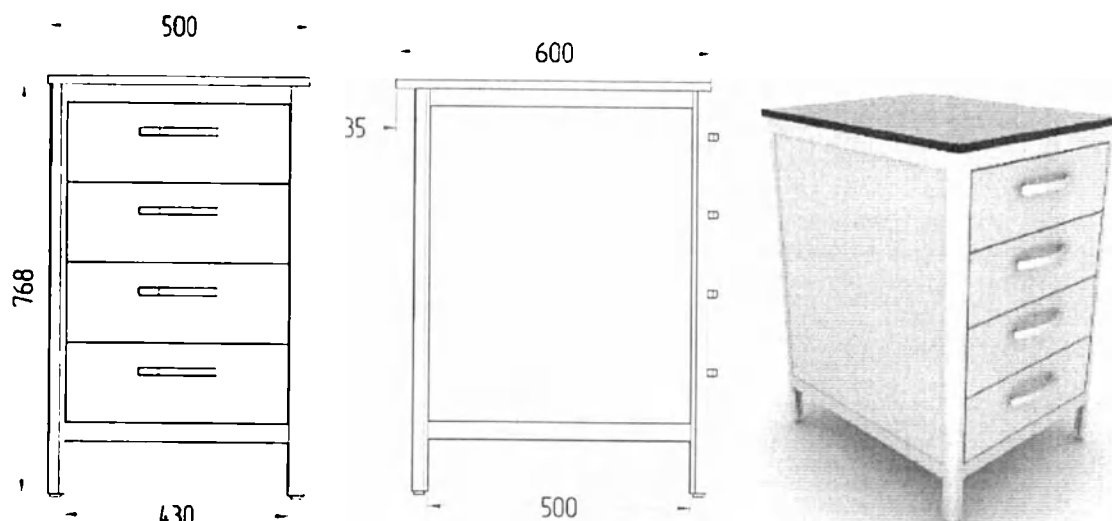


Рисунок 2 - Тумба медицинская с четырьмя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-002)

Таблица 2 - Размеры тумбы медицинской с четырьмя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-002)

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 6 из 52

	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Максимальная высота тумбы	Минимальная высота тумбы	Ящики 4 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	500	600	830	800	425	450

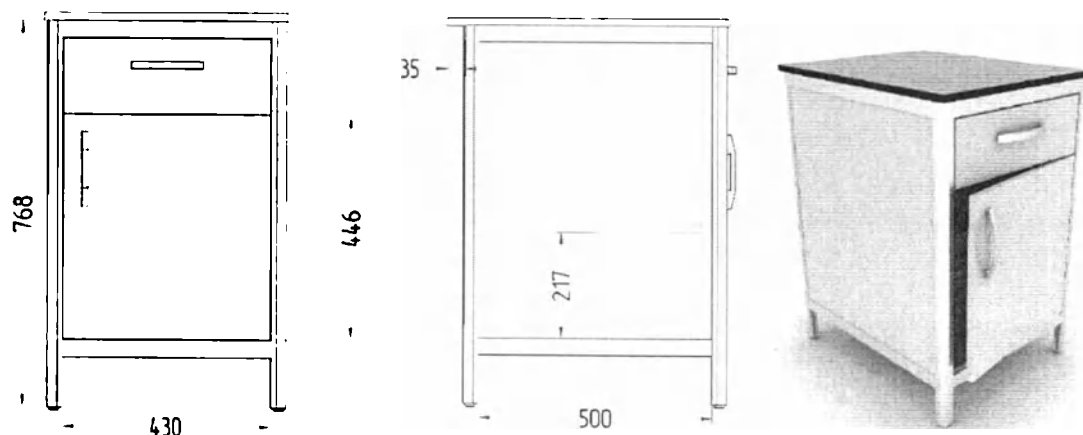


Рисунок 3 - Тумба медицинская с выдвижным ящиком, дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-003)

Таблица 3 - Размеры тумбы медицинской с выдвижным ящиком, дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-003)

	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Максимальная высота тумбы	Минимальная высота тумбы	Полка 1 шт.		Ящик 1 шт.	
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	500	600	830	800	450	510	425	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 7 из 52

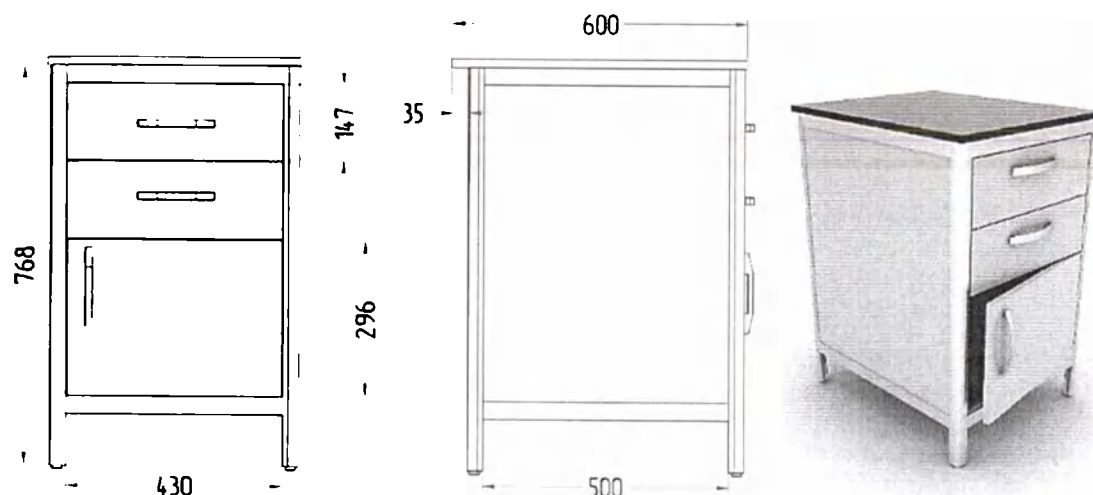


Рисунок 4 - Тумба медицинская с двумя выдвижными ящиками, дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-004)

Таблица 4 - Размеры тумбы медицинской с двумя выдвижными ящиками, дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-004)

Размеры, мм	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Максимальная высота тумбы	Минимальная высота тумбы	Ящики 2 шт.	
					Ширина	Глубина
	500	600	830	800	425	450

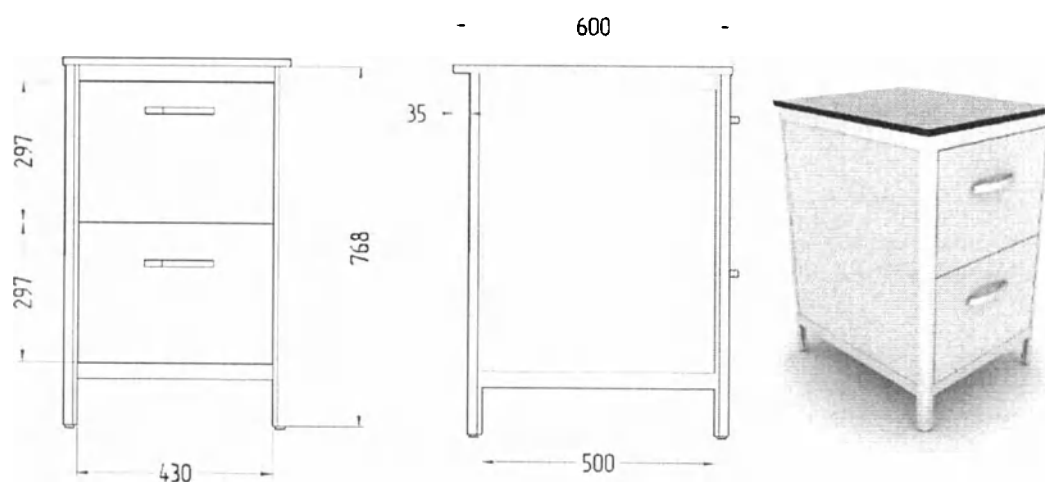


Рисунок 5 - Тумба медицинская с двумя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-005)

Таблица 5 - Размеры тумбы медицинской с двумя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-005)

Размеры, мм	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Максимальная высота тумбы	Минимальная высота тумбы	Ящики 2 шт.	
					Ширина	Глубина
	500	600	830	800	425	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 8 из 52

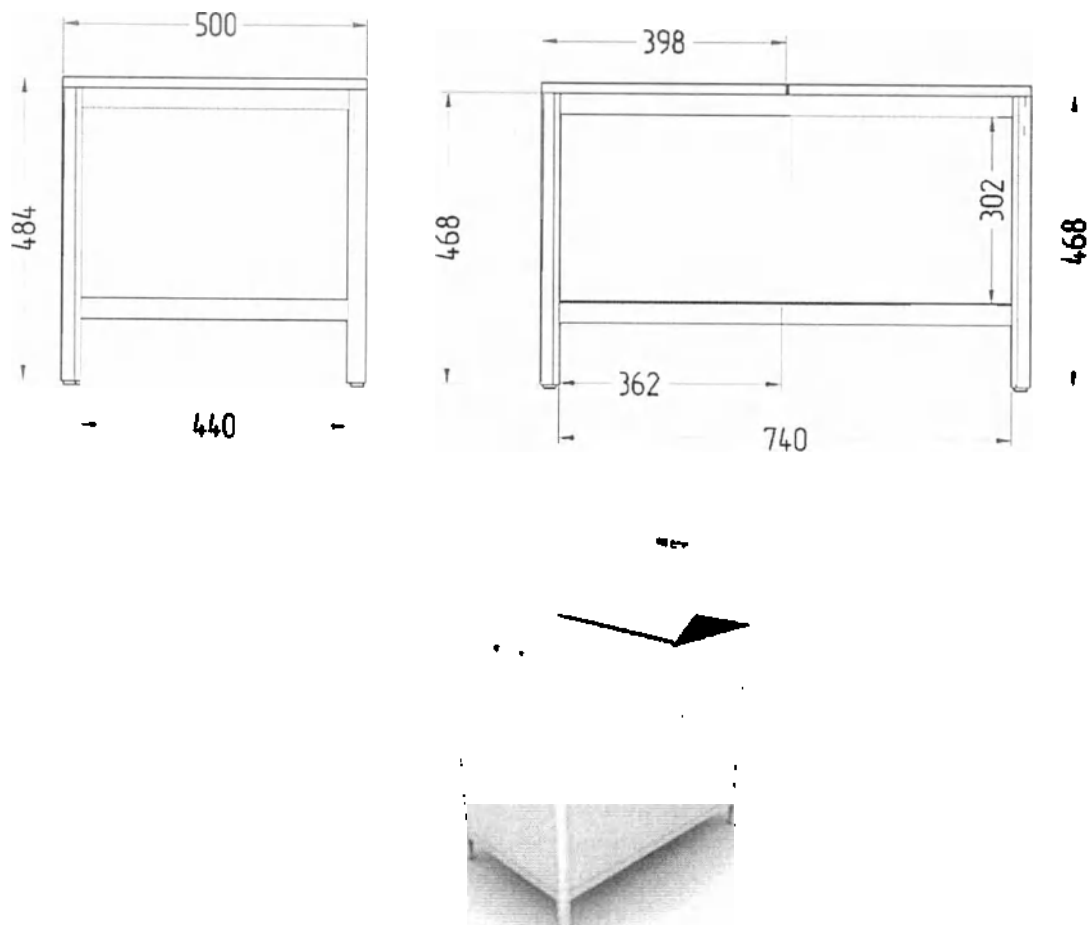


Рисунок 6 — Тумба медицинская для бинта (Арт. Т-007)

Таблица 6 — Размеры тумбы медицинской для бинта (Арт. Т-007)

	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Максимальная высота тумбы	Минимальная высота тумбы
Размеры, мм	800	500	530	500

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И	
	Версия:	1.3
	Страница:	9 из 52

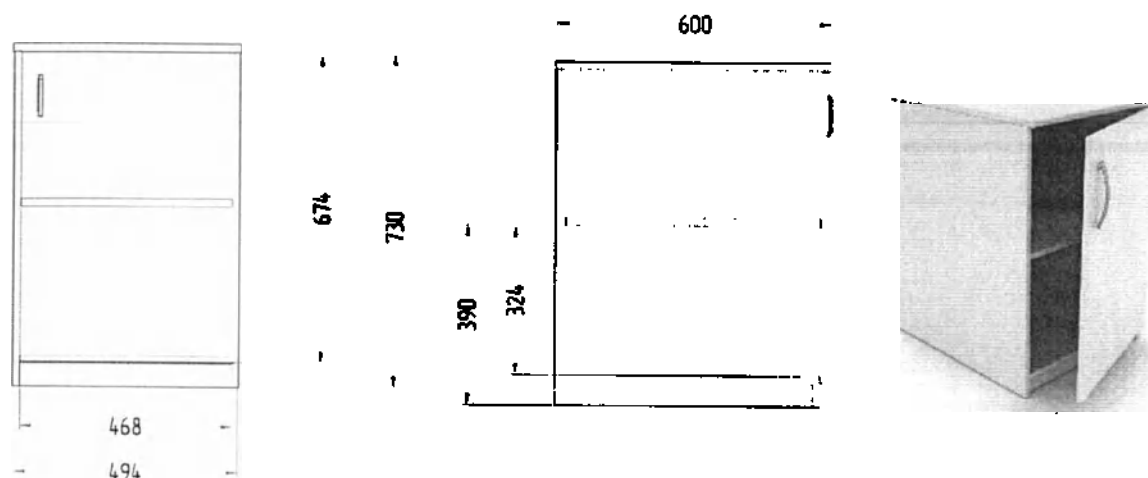


Рисунок 7 - Тумба медицинская с дверью (Арт. Т-008)

Таблица 7 - Размеры тумбы медицинской с дверью (Арт. Т-008)

Размеры, мм	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Высота тумбы	Полка 1 шт.	
				Ширина	Глубина
	500	600	750	467	550

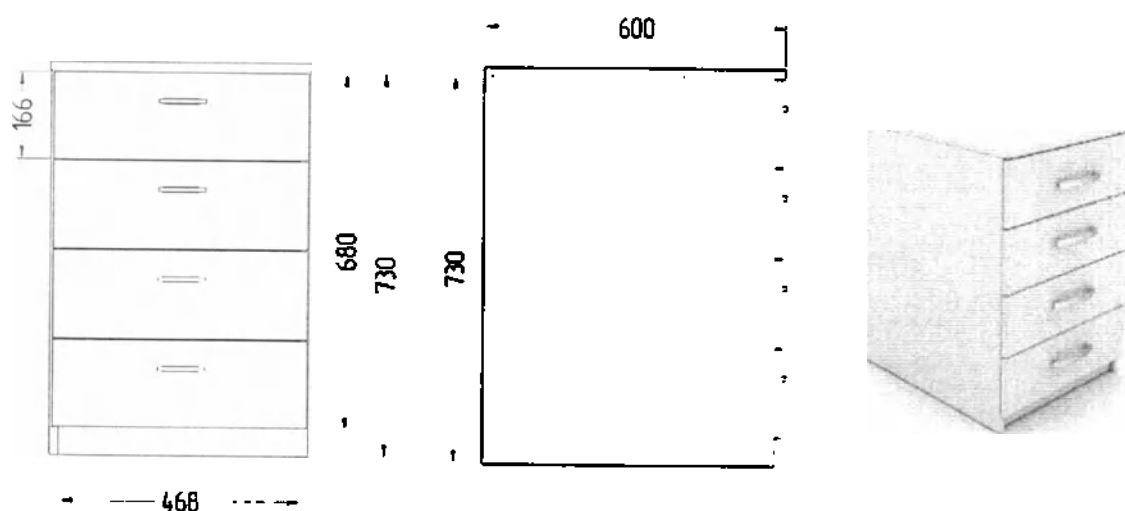


Рисунок 8 - Тумба медицинская с четырьмя выдвижными ящиками (Арт. Т-009)

Таблица 8 - Размеры тумбы медицинской с четырьмя выдвижными ящиками (Арт. Т-009)

Размеры, мм	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Высота тумбы	Ящики 4 шт.	
				Ширина	Глубина
	500	600	750	496	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И	
	Версия:	1.3
	Страница:	10 из 52

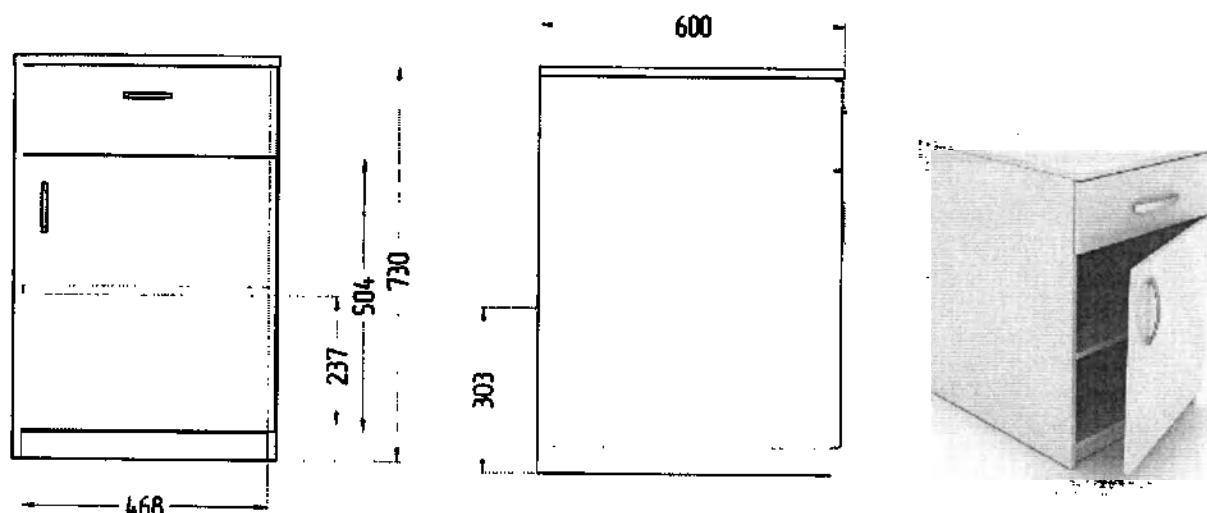


Рисунок 9 - Тумба медицинская с выдвижным ящиком и дверью (Арт. Т-010)

Таблица 9 - Размеры тумбы медицинской с выдвижным ящиком и дверью (Арт. Т-010)

	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Высота тумбы	Полка 1 шт.		Ящик 1 шт.	
				Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	500	600	750	467	550	496	450

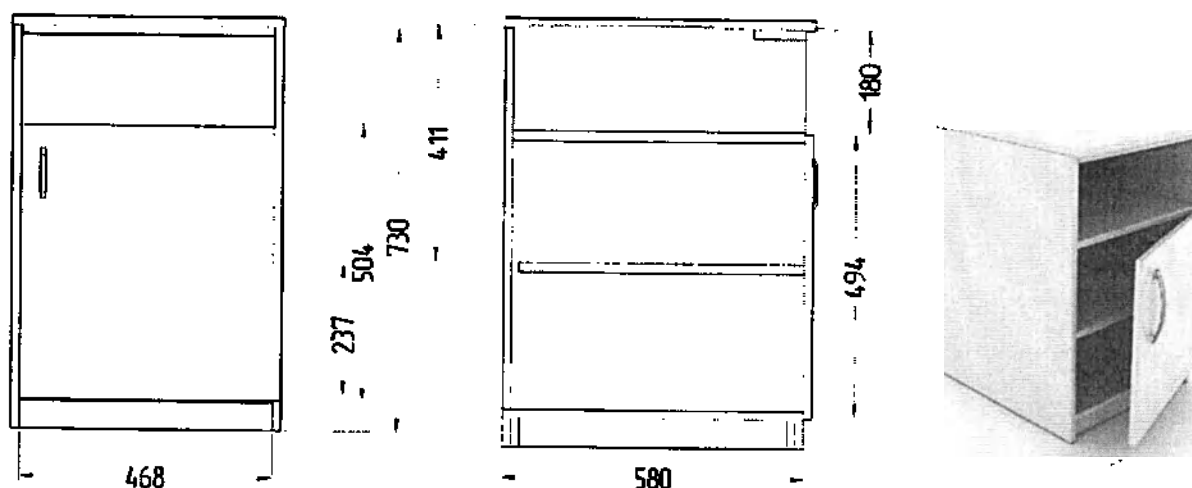


Рисунок 10 - Тумба медицинская с полкой и дверью (Арт. Т-011)

Таблица 10 - Размеры тумбы медицинской с полкой и дверью (Арт. Т-011)

	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Высота тумбы	Полка несъемная верхняя 1 шт.		Полка съемная нижняя 1 шт.	
				Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	500	600	750	468	564	467	550

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 11 из 52

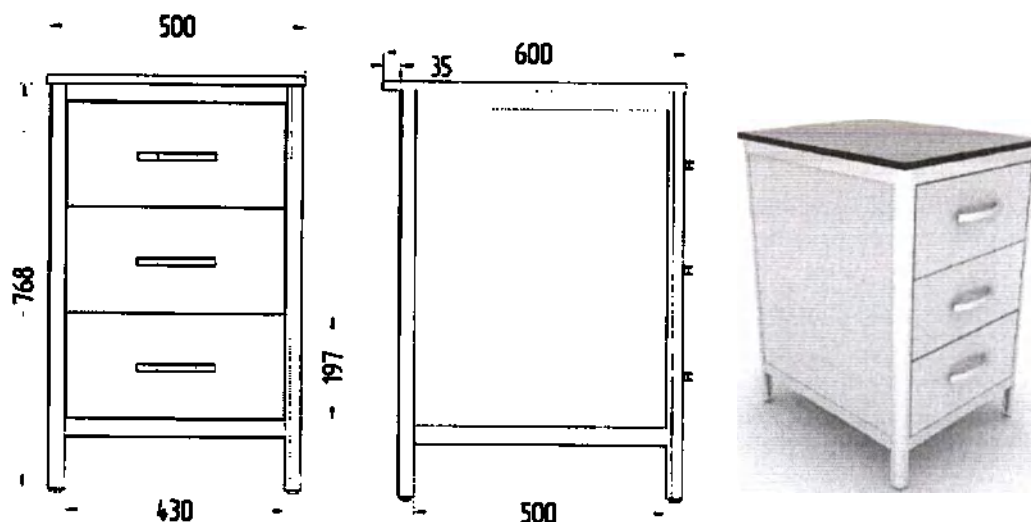


Рисунок 11 - Тумба медицинская с тремя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-012)

Таблица 11 - Размеры тумбы медицинской с тремя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-012)

Размеры, мм	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Максимальная высота тумбы	Минимальная высота тумбы	Ящики 3 шт.	
					Ширина	Глубина
	500	600	830	800	425	450

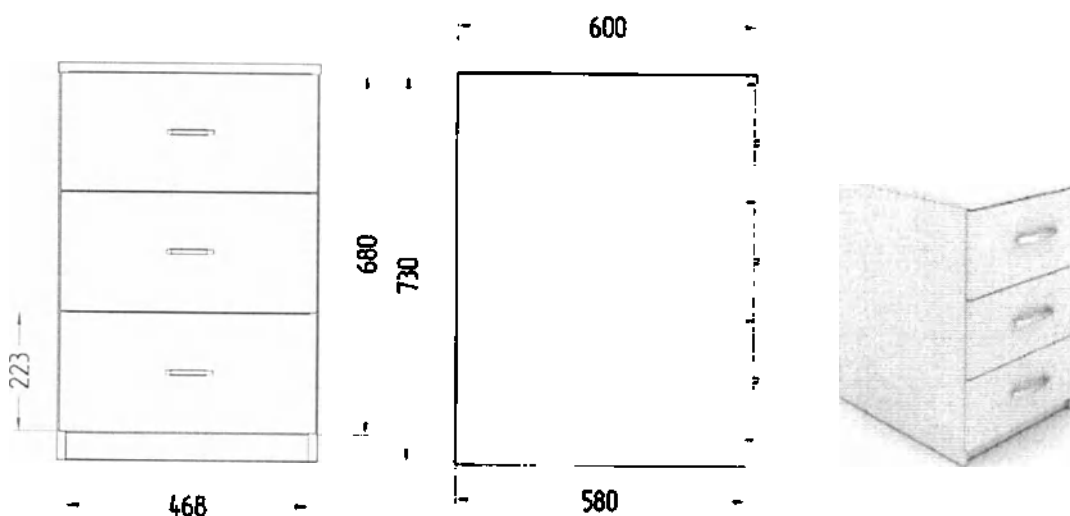


Рисунок 12 - Тумба медицинская с тремя выдвижными ящиками (Арт. Т-013)

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 12 из 52

Таблица 12 - Размеры тумбы медицинской с тремя выдвижными ящиками (Арт. Т-013)

	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Высота тумбы	Ящики 3 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	500	600	750	496	450

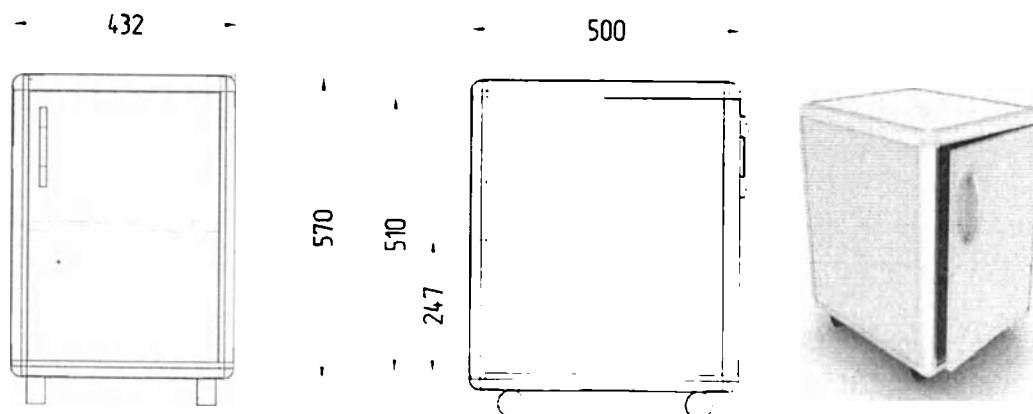


Рисунок 13 - Тумба медицинская передвижная кабинетная с дверью (Арт. ТП-001)

Таблица 13 - Размеры тумбы медицинской передвижной кабинетной с дверью (Арт. ТП-001)

	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Высота тумбы	Полка 1 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	432	500	620	394	450

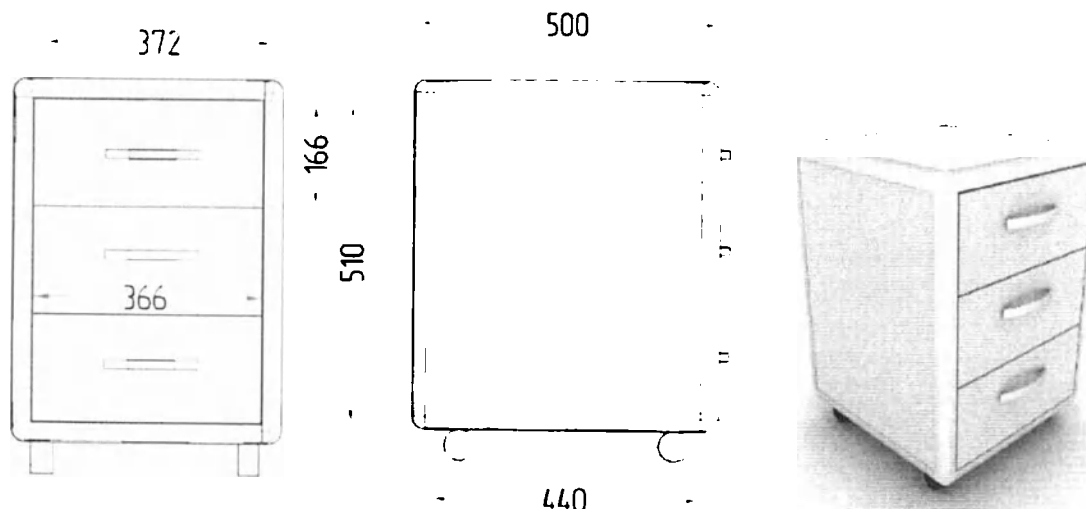


Рисунок 14 - Тумба медицинская передвижная кабинетная с тремя выдвижными ящиками (Арт. ТП-002)

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 13 из 52

Таблица 14 - Размеры тумбы медицинской передвижной кабинетной с тремя выдвижными ящиками (Арт. ТП-002)

Размеры, мм	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Высота тумбы	Ящики 3 шт.	
				Ширина	Глубина
	432	500	620	366	450

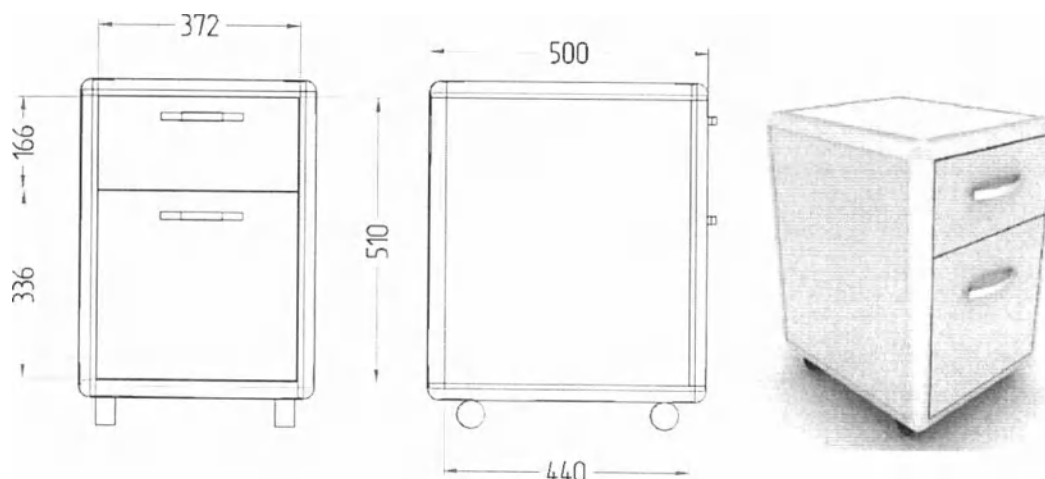


Рисунок 15 - Тумба медицинская передвижная с двумя выдвижными ящиками (Арт. ТП-003)

Таблица 15 - Размеры тумбы медицинской передвижной с двумя выдвижными ящиками (Арт. ТП-003)

Размеры, мм	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Высота тумбы	Ящики 2 шт.	
				Ширина	Глубина
	432	500	620	366	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И	
	Версия:	1.3
	Страница:	14 из 52

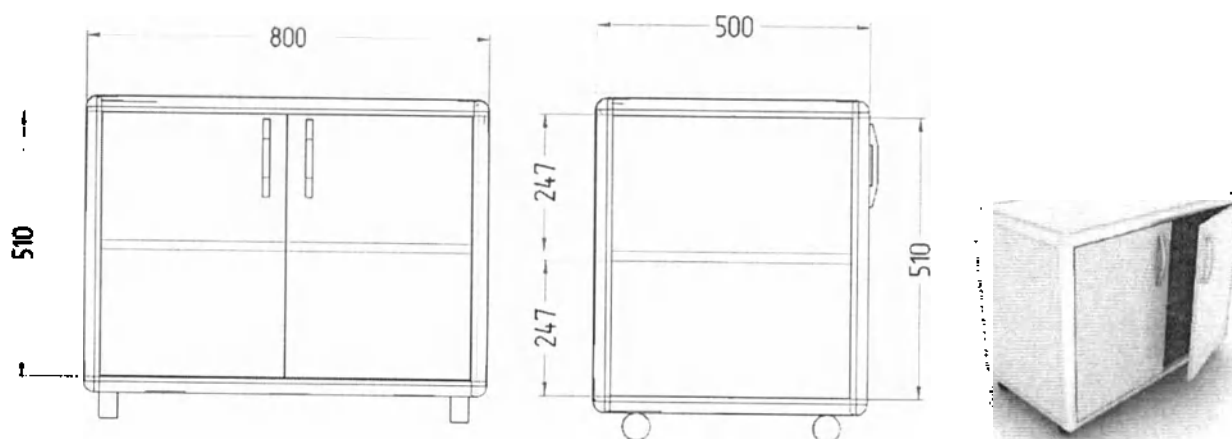


Рисунок 16 - Тумба медицинская передвижная двустворчатая (Арт. ТП-004)

Таблица 16 - Размеры тумбы медицинской передвижной двустворчатой (Арт. ТП-004)

Размеры, мм	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Высота тумбы	Полка 1 шт.	
				Ширина	Глубина
	800	500	620	762	450

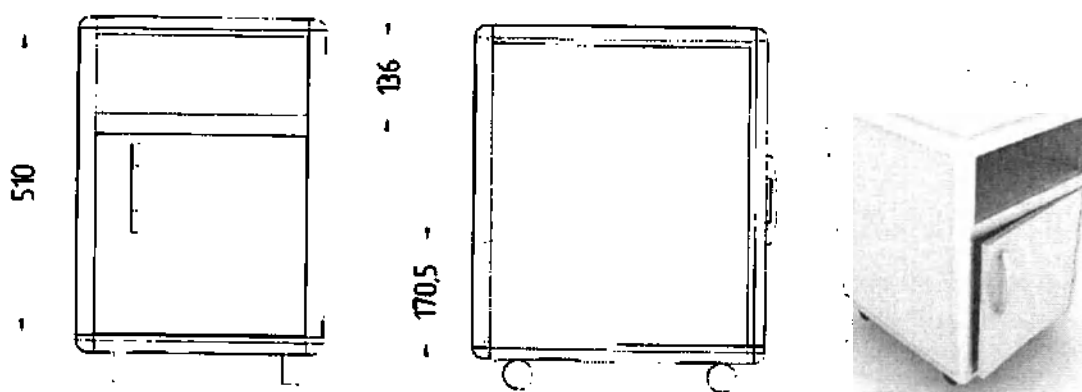


Рисунок 17 - Тумба медицинская передвижная кабинетная с полкой и дверью (Арт. ТП-005)

Таблица 17 - Размеры тумбы медицинской передвижной кабинетной с полкой и дверью (Арт. ТП-005)

Размеры, мм	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Высота тумбы	Полка несъемная верхняя 1 шт.		Полка съемная нижняя 1 шт.	
				Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
	432	500	620	396	462	392	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 15 из 52

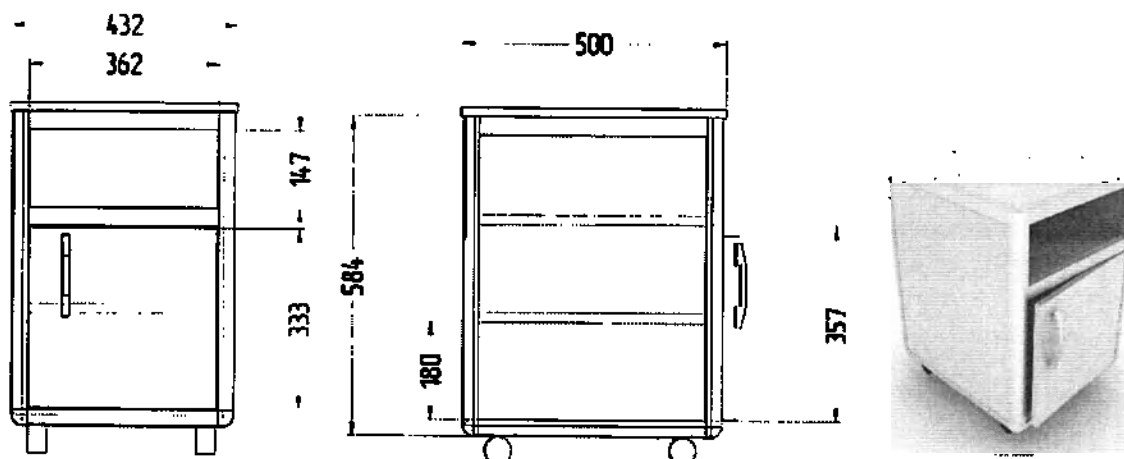


Рисунок 18 - Тумба медицинская передвижная с полкой, дверью и столешницей (Арт. ТП-006)

Таблица 18 - Размеры тумбы медицинской передвижной с полкой, дверью и столешницей (Арт. ТП-006)

Размеры, мм	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Высота тумбы	Полка верхняя 1 шт.		Полка нижняя 1 шт.	
				Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
	432	500	650	381	449	385	437

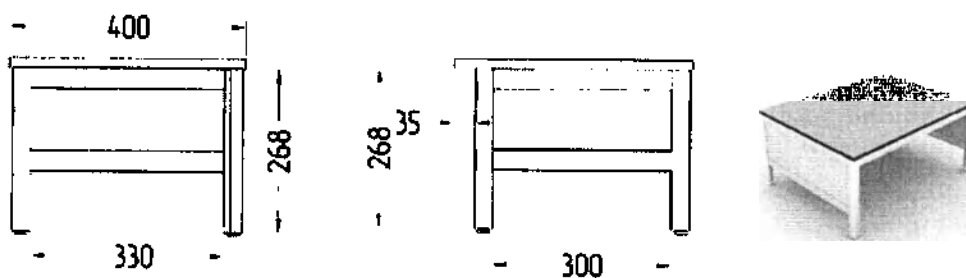


Рисунок 19 - Тумба медицинская напольная (Арт. ТП-007)

Таблица 19 - Размеры тумбы медицинской напольной (Арт. ТП-007)

Размеры, мм	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Максимальная высота тумбы	Минимальная высота тумбы
	400	400	330	300

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 16 из 52

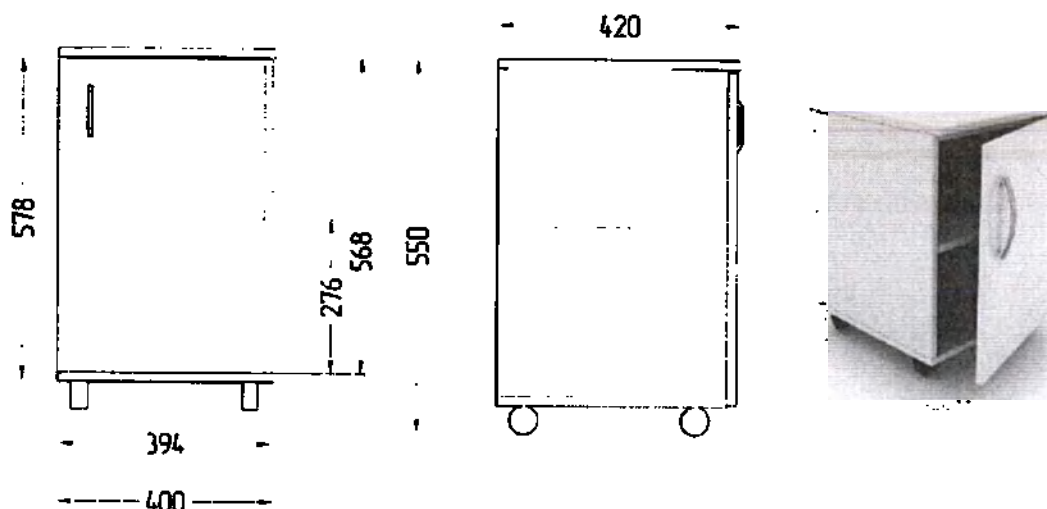


Рисунок 20 - Тумба медицинская передвижная одностворчатая (Арт. ТП-008)

Таблица 20 - Размеры тумбы медицинской передвижной одностворчатой (Арт. ТП-008)

Размеры, мм	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Высота тумбы	Полки 1 шт.	
				Ширина	Глубина
	400	420	650	367	380

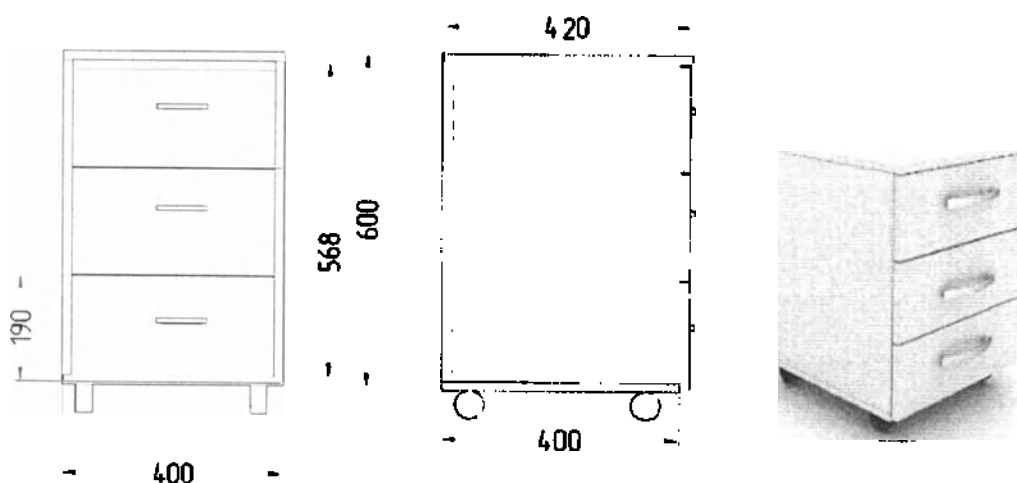


Рисунок 21 - Тумба медицинская передвижная с тремя выдвижными ящиками (Арт. ТП-009)

Таблица 21 - Размеры тумбы медицинской передвижной с тремя выдвижными ящиками (Арт. ТП-009)

Размеры, мм	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Высота тумбы	Ящики 3 шт.	
				Ширина	Глубина
	400	420	650	396	350

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 17 из 52

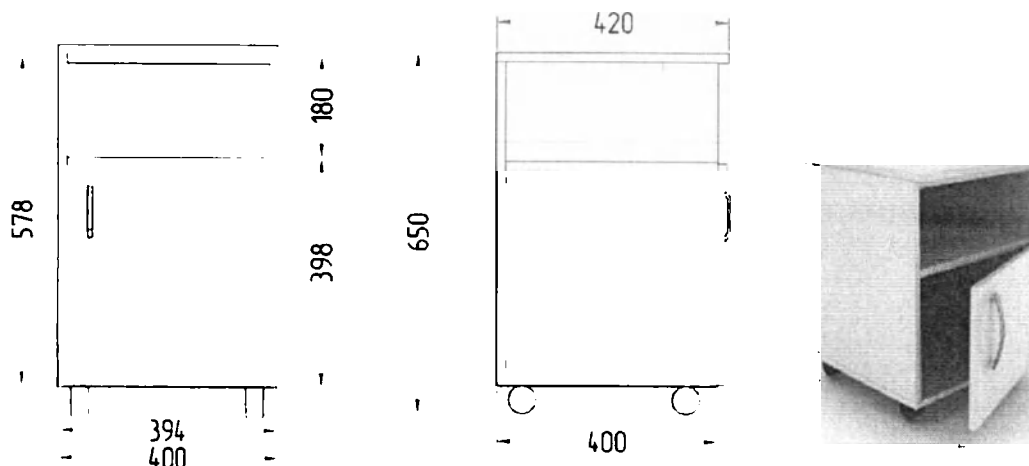


Рисунок 22 - Тумба медицинская передвижная с полкой и дверью (Арт. ТП-010)

Таблица 22 - Размеры тумбы медицинской передвижной с полкой и дверью (Арт. ТП-010)

Размеры, мм	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Высота тумбы	Полка 1 шт.	
				Ширина	Глубина
	400	420	650	368	384

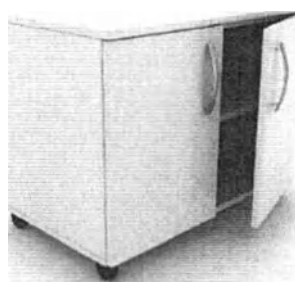
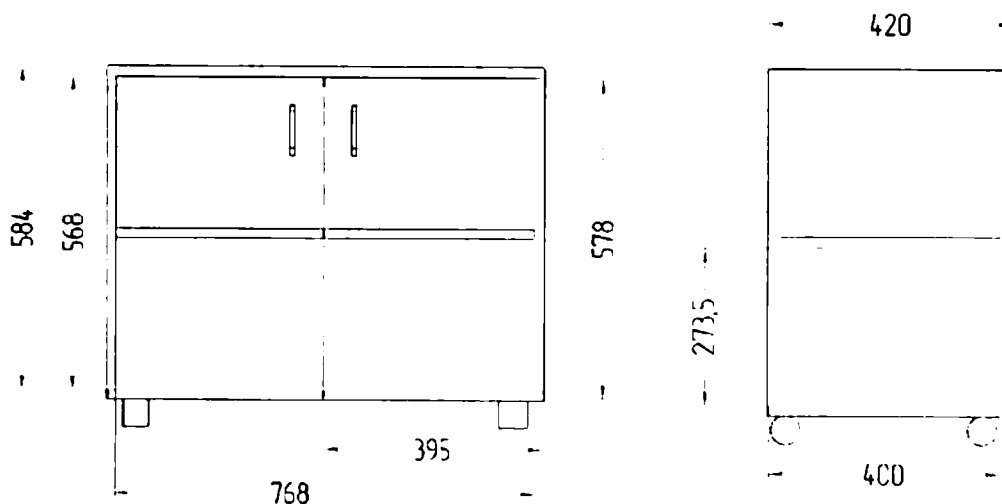


Рисунок 23 - Тумба медицинская передвижная с двумя дверями (Арт. ТП-011)

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И	
	Версия: 1.3	
	Страница: 18 из 52	

Таблица 23 - Размеры тумбы медицинской передвижной с двумя дверями (Арт. ТП-011)

	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Высота тумбы	Полка 1 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	800	420	650	766	380

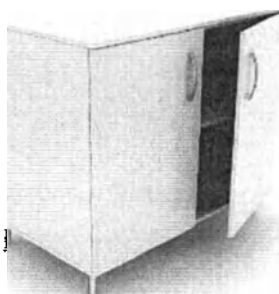
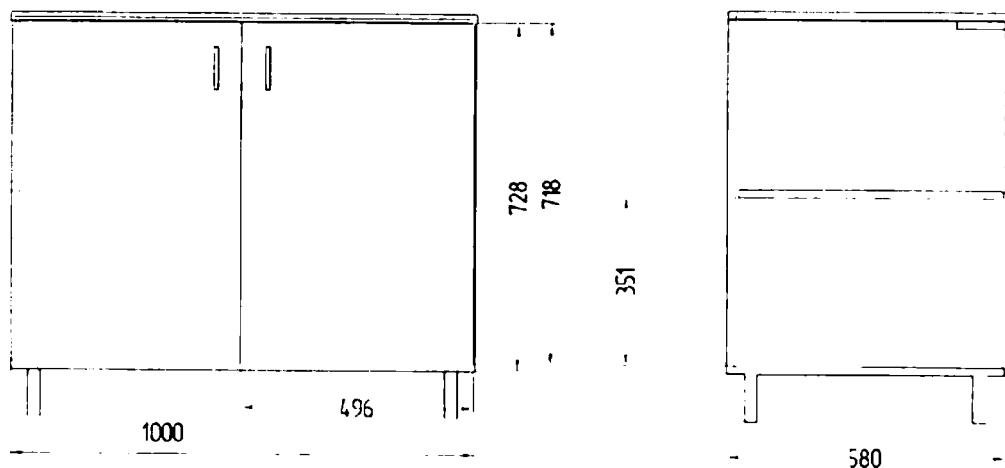


Рисунок 24 - Тумба медицинская с двумя дверями (Арт. ТП-012)

Таблица 24 - Размеры тумбы медицинской с двумя дверями (Арт. ТП-012)

	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Максимальная высота тумбы	Минимальная высота тумбы	Полка 1 шт.	
					Ширина	Глубина
Размеры, мм	1000	600	865	850	966	550

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 19 из 52

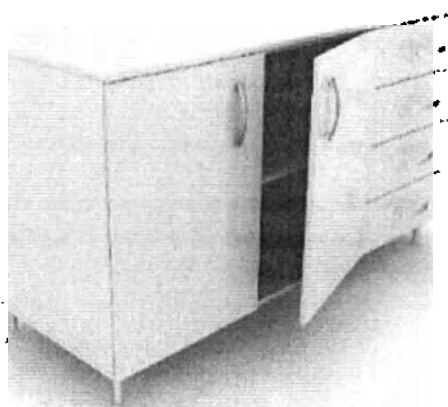
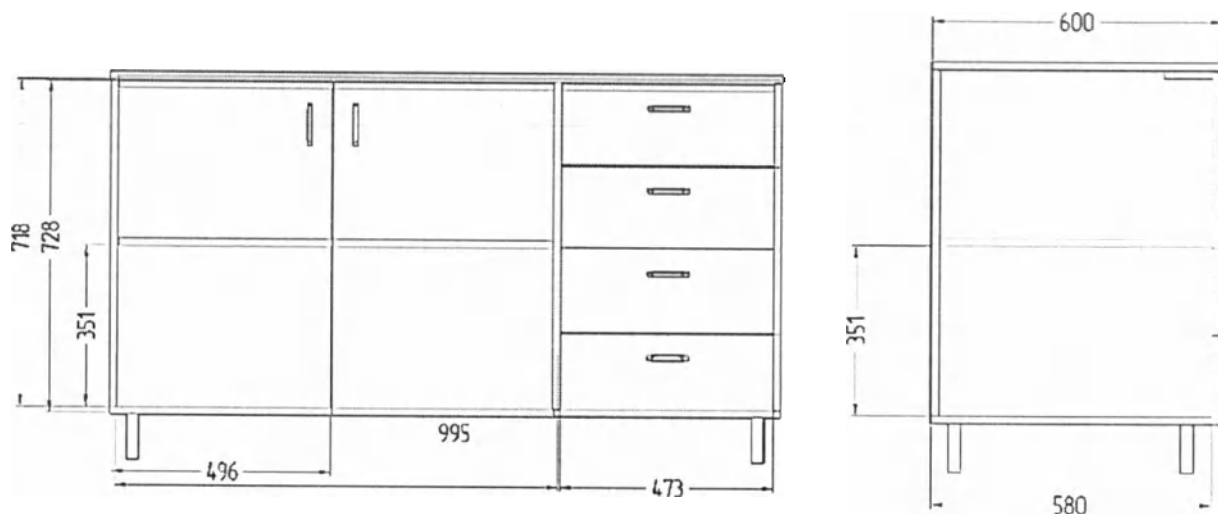


Рисунок 25 - Тумба медицинская с четырьмя ящиками
двухсекционная (Арт. ТП-013)

Таблица 25 - Размеры тумбы медицинской с четырьмя ящиками двухсекционной
(Арт. ТП-013)

	Ширина тумбы	Глубина тумбы	Максималь ная высота тумбы	Минималь ная высота тумбы	Полка 1 шт.		Ящики 4 шт.	
					Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	1500	600	865	850	977	550	496	450

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 20 из 52

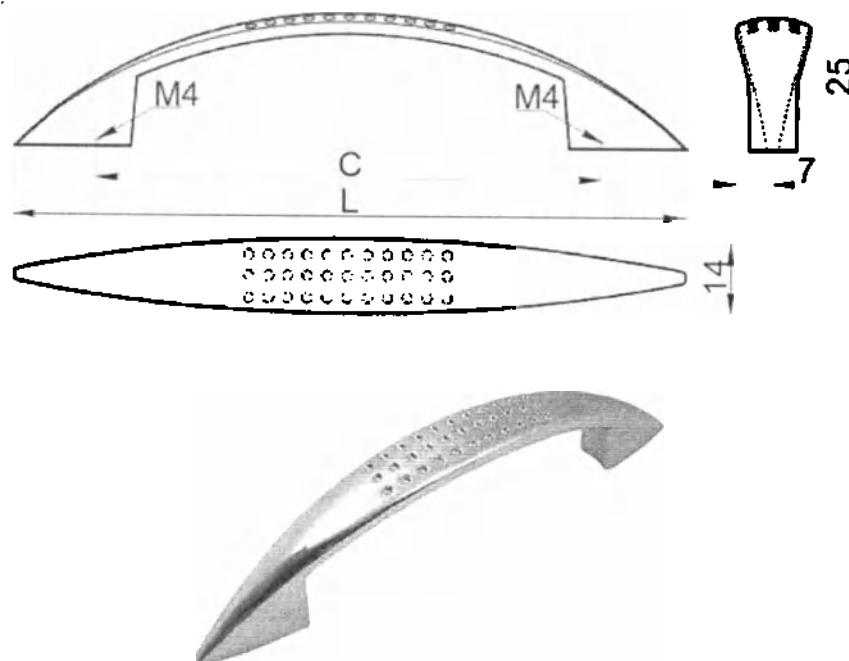


Рисунок 26 – Ручка дверная

Таблица 26 – Размеры ручки дверной

	Общая длина (L)	Длина (C)
Размеры, мм	125	96

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 21 из 52

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Основные параметры и характеристики

2.1.1 Тумба соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371, технических условий и комплекту конструкторской документации ПТИС.324514.001 согласно таблице 27, утвержденной в установленном порядке.

2.1.2 Конструкция и внешний вид тумбы должны соответствовать рисункам 1 – 25.

Таблица 27- Перечень исполнений тумб в полной (ассортиментной) номенклатуре

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324514.001	№ Рисунка
1.	Тумба медицинская с дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-001)	ПТИС.324514.001-01	Рис. 1
2.	Тумба медицинская с четырьмя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-002)	ПТИС.324514.001-02	Рис. 2
3.	Тумба медицинская с выдвижным ящиком, дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-003)	ПТИС.324514.001-03	Рис. 3
4.	Тумба медицинская с двумя выдвижными ящиками, дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-004)	ПТИС.324514.001-04	Рис. 4
5.	Тумба медицинская с двумя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-005)	ПТИС.324514.001-05	Рис. 5
6.	Тумба медицинская для бахил (Арт. Т-007)	ПТИС.324514.001-06	Рис. 6
7.	Тумба медицинская с дверью (Арт. Т-008)	ПТИС.324514.001-07	Рис. 7
8.	Тумба медицинская с четырьмя выдвижными ящиками (Арт. Т-009)	ПТИС.324514.001-08	Рис. 8
9.	Тумба медицинская с выдвижным ящиком и дверью (Арт. Т-010)	ПТИС.324514.001-09	Рис. 9
10.	Тумба медицинская с полкой и дверью (Арт. Т-011)	ПТИС.324514.001-10	Рис. 10
11.	Тумба медицинская с тремя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-012)	ПТИС.324514.001-11	Рис. 11
12.	Тумба медицинская с тремя выдвижными ящиками (Арт. Т-013)	ПТИС.324514.001-12	Рис. 12
13.	Тумба медицинская передвижная кабинетная с дверью (Арт. ТП-001)	ПТИС.324514.001-13	Рис. 13
14.	Тумба медицинская передвижная кабинетная с тремя выдвижными ящиками (Арт. ТП-002)	ПТИС.324514.001-14	Рис. 14
15.	Тумба медицинская передвижная с двумя выдвижными ящиками (Арт. ТП-003)	ПТИС.324514.001-15	Рис. 15
16.	Тумба медицинская передвижная двустворчатая (Арт. ТП-004)	ПТИС.324514.001-16	Рис. 16
17.	Тумба медицинская передвижная кабинетная с полкой и дверью (Арт. ТП-005)	ПТИС.324514.001-17	Рис. 17
18.	Тумба медицинская передвижная с полкой, дверью и столешницей (Арт. ТП-006)	ПТИС.324514.001-18	Рис. 18
19.	Тумба медицинская напольная (Арт. ТП-007)	ПТИС.324514.001-19	Рис. 19

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 22 из 52

№	Наименование изделия, его частей	Обозначение документа ПТИС.324514.001	№ Рисунка
20.	Тумба медицинская передвижная одностворчатая (Арт. ТП-008)	ПТИС.324514.001-20	Рис. 20
21.	Тумба медицинская передвижная с тремя выдвижными ящиками (Арт. ТП-009)	ПТИС.324514.001-21	Рис. 21
22.	Тумба медицинская передвижная с полкой и дверью (Арт. ТП-010)	ПТИС.324514.001-22	Рис. 22
23.	Тумба медицинская передвижная с двумя дверями (Арт. ТП-011)	ПТИС.324514.001-23	Рис. 23
24.	Тумба медицинская с двумя дверями (Арт. ТП-012)	ПТИС.324514.001-24	Рис. 24
25.	Тумба медицинская с четырьмя ящиками двухсекционная (Арт. ТП-013)	ПТИС.324514.001-25	Рис. 25

2.1.3 Габаритные размеры и масса тумбы соответствуют значениям, указанным в таблице 28. Для тумб Арт. Т-001 - Арт. Т-005, Арт. Т-007, Арт. ТП-007, Арт. ТП-012, Арт. ТП-013 габаритные размеры указаны с регулируемыми опорами во вкрученном состоянии. Предельное отклонение габаритных размеров тумбы ± 4 мм.

Таблица 28 – Массогабаритные характеристики тумбы

№	Наименование изделия	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, не менее, кг
1.	Тумба медицинская с дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-001)	500×600×800	31,2
2.	Тумба медицинская с четырьмя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-002)	500×600×800	41,0
3.	Тумба медицинская с выдвижным ящиком, дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-003)	500×600×800	34,5
4.	Тумба медицинская с двумя выдвижными ящиками, дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-004)	500×600×800	37,6
5.	Тумба медицинская с двумя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-005)	500×600×800	29,1
6.	Тумба медицинская для бахил (Арт. Т-007)	800×500×500	25,5
7.	Тумба медицинская с дверью (Арт. Т-008)	500×600×750	31,5
8.	Тумба медицинская с четырьмя выдвижными ящиками (Арт. Т-009)	500×600×750	36,3
9.	Тумба медицинская с выдвижным ящиком и дверью (Арт. Т-010)	500×600×750	39,2
10.	Тумба медицинская с полкой и дверью (Арт. Т-011)	500×600×750	38,7
11.	Тумба медицинская с тремя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-012)	500×600×800	40,0
12.	Тумба медицинская с тремя выдвижными ящиками (Арт. Т-013)	500×600×750	41,1
13.	Тумба медицинская передвижная кабинетная с дверью (Арт. ТП-001)	432×500×620	20,5
14.	Тумба медицинская передвижная кабинетная с тремя выдвижными ящиками (Арт. ТП-002)	432×500×620	27,0

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 23 из 52

№	Наименование изделия	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса, не менее, кг
15.	Тумба медицинская передвижная с двумя выдвижными ящиками (Арт. ТП-003)	432×500×620	25,0
16.	Тумба медицинская передвижная двустворчатая (Арт. ТП-004)	800×500×620	31,4
17.	Тумба медицинская передвижная кабинетная с полкой и дверью (Арт. ТП-005)	432×500×620	19,2
18.	Тумба медицинская передвижная с полкой, дверью и столешницей (Арт. ТП-006)	432×500×650	25,9
19.	Тумба медицинская напольная (Арт. ТП-007)	400×400×300	7,2
20.	Тумба медицинская передвижная одностворчатая (Арт. ТП-008)	400×420×650	19,4
21.	Тумба медицинская передвижная с тремя выдвижными ящиками (Арт. ТП-009)	400×420×650	24,9
22.	Тумба медицинская передвижная с полкой и дверью (Арт. ТП-010)	400×420×650	19,4
23.	Тумба медицинская передвижная с двумя дверями (Арт. ТП-011)	800×420×650	32,7
24.	Тумба медицинская с двумя дверями (Арт. ТП-012)	1000×600×850	44,3
25.	Тумба медицинская с четырьмя ящиками двухсекционная (Арт. ТП-013)	1500×600×850	78,0

2.1.4 Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не превышают значений по ГОСТ 16371.

2.1.5 Покоробленность щитовых деталей тумбы по ГОСТ 16371.

2.1.6 На видимой поверхности тумбы отсутствуют дефекты по ГОСТ 20400: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

2.1.7 Толщина стенок, дверей и полок тумбы 16 мм. Толщина столешницы 16 мм. Допускаемое отклонение $\pm 0,5$ мм.

2.1.8 Столешница тумбы, полки и днища ящиков выдерживают двукратную номинальную равномерно распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой:

- на столешницу тумбы 30 ± 1 кг;
- на полку $5 \pm 0,5$ кг;
- на дно ящика 5 ± 1 кг.

2.1.9 Количество и размеры полок и ящиков, а также их расположение соответствуют требованиям, приведенным в п. 1.6 (рис. 1 - 25). Предельные отклонения размеров ± 2 мм.

2.1.10 Дверцы тумбы открываются и закрываются плавно, без перекосов, с усилием не более 20 Н.

2.1.11 Петли дверей обеспечивают открывание дверей на 175 ± 2 градусов.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 24 из 52

2.1.12 Выдвижные ящики тумбы имеют свободный ход без заеданий и перекосов, с усилием выдвигания не более 30 Н.

2.1.13 Ящики имеют устройство для предотвращения выпадения их из корпуса.

2.1.14 Тумба устойчиво стоит на опорах. Зазор между одной из опор и поверхностью пола не превышает 3 мм.

2.1.15 Опоры тумб Арт. Т-001, Арт. Т-002, Арт. Т-003, Арт. Т-004, Арт. Т-005, ~~Арт. Т-007, Арт. ТП-007~~ обеспечивают регулировку по высоте до 30 мм.

2.1.16 Опоры тумб Арт. ТП-012, Арт. ТП-013 обеспечивают регулировку по высоте до 15 мм.

2.1.17 Тумба устойчива при приложении нагрузки на открытую дверцу 45 Н, либо при приложении нагрузки на выдвинутый ящик 75 Н.

2.1.18 Передвижные тумбы оснащены четырьмя самоориентирующимися колесами диаметром 40 ± 2 мм.

2.1.19 Колесные опоры обеспечивают высоту тумбы 50 ± 2 мм над поверхность пола.

2.1.20 Наибольшее усилие, необходимое для перемещения передвижной тумбы с колесами по горизонтальному бесшовному полу, с равномерно распределенной полуторакратной нагрузкой, не более 60 Н.

2.1.21 Колеса вращаются на горизонтальной оси свободно, без заедания, от усилия не более 0,35 Н. Колеса вращаются относительно вертикальной оси свободно, без заедания.

2.1.22 Тумба, имеющая самопритягивающиеся (инерционные) мебельные петли, обеспечивает предотвращение самопроизвольного открывания дверей и возвращение дверец на определенное место без дополнительных усилий.

2.1.23 Защитные и защитно-декоративные покрытия для поверхностей деталей из металла по ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303 для изделий группы условий 1.

2.1.24 Наружные поверхности тумбы устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 (3 % раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % универсального моющего средства типа «Лотос» ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003).

2.1.25 Тумба при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями для изделий исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150.

2.1.26 Тумба обладает устойчивостью к механическим воздействиям при эксплуатации, соответствующим требованиям группы 1; тумба передвижная требованиям группы 3 по ГОСТ 50444.

2.1.27 При транспортировании тумба в транспортной таре обладает устойчивостью к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.

2.1.28 Тумба в транспортной таре обладает устойчивостью к воздействию климатических факторов при хранении в крытых помещениях отправителя (получателя) по ГОСТ 16371 при температуре не ниже плюс 2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

2.1.29 Тумба в транспортной упаковке обладает устойчивостью к механическим воздействиям при транспортировании соответствующим ГОСТ Р 50444.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 25 из 52

2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

2.2.1 Материалы, сырье и покупные изделия, применяемые при изготовлении тумбы, соответствуют требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, сырье и покупные изделия, предусмотренные действующим законодательством, и имеют сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

2.2.2 Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве тумбы, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297.

2.2.3 Для изготовления тумбы используется сырье, материалы и покупные изделия согласно таблице 29. Допускается применение материалов другого изготовителя, после прохождения необходимых испытаний, а также при условии неизменности конструктивных и функциональных характеристик, требований безопасности п. 3.1, соответствии материалов требованиям п. 2.2.1, 2.2.2.

Таблица 29 – Сырье и материалы

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
– Тумба медицинская с дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-001)	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, дверь, полка	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия
		Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Столешница	Пластик бумажно-слоистый декоративный высокого давления (HPL), цвет: серый 478, производства «АВЕТ LAMINATI S.p.A.», Италия
	Ручка	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
– Тумба медицинская с четырьмя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-002); – Тумба медицинская с двумя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-005); – Тумба медицинская с тремя выдвижными	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, ящики	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 26 из 52

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-012)		Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Столешница	Пластик бумажно-слоистый декоративный высокого давления (HPL), цвет: серый 478, производства «ABET LAMINATI S.p.A.», Италия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08X18H10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
– Тумба медицинская с выдвижным ящиком, дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-003); – Тумба медицинская с двумя выдвижными ящиками, дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-004)	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31 (состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, двери, полка, ящики	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия
		Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Столешница	Пластик бумажно-слоистый декоративный высокого давления (HPL), цвет: серый 478, производства «ABET LAMINATI S.p.A.», Италия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08X18H10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
		Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
— Тумба медицинская для бахил (Арт. Т-007)	Каркас, опоры	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31 (состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, двери	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия
		Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Ручка	Нержавеющая сталь марки 08X18H10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 27 из 52

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
– Тумба медицинская с дверью (Арт. Т-008); – Тумба медицинская с полкой и дверью (Арт. Т-011)	Стенки, дверь, полки	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
– Тумба медицинская с четырьмя выдвижными ящиками (Арт. Т-009); – Тумба медицинская с тремя выдвижными ящиками (Арт. Т-013)	Стенки, ящики	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
– Тумба медицинская с выдвижным ящиком и дверью (Арт. Т-010)	Стенки, полки, дверь, ящики	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 28 из 52

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
– Тумба медицинская передвижная кабинетная с дверью (Арт. ТП-001); – Тумба медицинская передвижная двустворчатая (Арт. ТП-004); – Тумба медицинская передвижная кабинетная с полкой и дверью (Арт. ТП-005)	Каркас	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, двери, полки	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Опоры	Мебельная опора N104BL/BL.3, колесо из АБС пластика марки OKWC 6011201 с площадкой для крепления из нержавеющей стали марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
– Тумба медицинская передвижная кабинетная с тремя выдвижными ящиками (Арт. ТП-002); – Тумба медицинская передвижная с двумя выдвижными ящиками (Арт. ТП-003)	Каркас	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия
	Стенки, ящики	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Опоры	Мебельная опора N104BL/BL.3, колесо из АБС пластика марки OKWC 6011201 с площадкой для крепления из нержавеющей стали марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
– Тумба медицинская передвижная с полкой,	Каркас	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31(состояние материала Т1, Т5), AlMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донской Алюминий», Россия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 29 из 52

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
дверью и столешницей (Арт. ТП-006)	Стенки, полки, дверь	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А. Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия
	Ручка	Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Опоры	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
— Тумба медицинская напольная (Арт. ТП-007)	Стенки	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А. Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия
	Столешница	Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Опоры	Пластик бумажно-слоистый декоративный высокого давления (HPL), цвет: серый 478, производства «ABET LAMINATI S.p.A.», Италия
— Тумба медицинская передвижная одностворчатая (Арт. ТП-008); — Тумба медицинская передвижная с полкой и дверью (Арт. ТП-010); — Тумба медицинская передвижная с двумя дверями (Арт. ТП-011)	Стенки, двери, полки	Профиль прессованный из алюминиевых сплавов марок: АД31 (состояние материала Т1, Т5), А1МgО, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) анодированный, производитель ООО «Донецкой Алюминий», Россия
	Ручки	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А. Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия
		Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 30 из 52

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
– Тумба медицинская передвижная с тремя выдвижными ящиками (Арт. ТП-009)	Опоры	Мебельная опора N104BL/BL.3, колесо из АБС пластика марки OKWC 6011201 с площадкой для крепления из нержавеющей стали марки 08X18N10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Стенки, ящики	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08X18N10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Опоры	Мебельная опора N104BL/BL.3, колесо из АБС пластика марки OKWC 6011201 с площадкой для крепления из нержавеющей стали марки 08X18N10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
– Тумба медицинская с двумя дверями (Арт. ТП-012)	Стенки, двери, полки	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08X18N10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Опоры	Мебельная опора N301CP/SC.1 хромированная Нержавеющая сталь марки 08X18N10 (ГОСТ 5632), производства: ООО «Боярд», Россия
– Тумба медицинская с четырьмя ящиками двухсекционная (Арт. ТП-013)	Стенки, двери, полка, ящики	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, группы качества А, Б, класс по выделению формальдегида Е1. ГОСТ 32289, производитель ООО «Томлесдрев», Россия или Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров торговой марки Eurodekor, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289, производитель ООО «ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ», Россия Кромка мебельная из полимерных материалов (ПВХ/АБС-пластик/ПП) серии RAUKANTEX Kantenband, производства «Rehau AG+CO», Германия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 31 из 52

Наименование изделия	Наименование составных частей	Наименование, марка, изготовитель материала
	Ручки	Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства ООО «Боярд», Россия
	Опоры	Мебельная опора N301CP/SC.1 хромированная Нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632), производства: ООО «Боярд», Россия

2.3 Требования к надежности

2.3.1 Средняя наработка на отказ (To) 10000 часов. Критериями отказа является несоответствие требованиям п.п. 2.1.5 - 2.1.8, 2.1.14 – 2.1.21.

2.3.2 Средний срок службы тумбы 4 года. Критерием предельного состояния тумбы считается невозможность или нецелесообразность ее восстановления (или использования).

2.4 Комплектность

2.4.1 Комплект поставки включает в себя:

- Тумба одного из исполнений, в сборе – 1 шт;
- Эксплуатационная документация:
Инструкция по применению – 1 шт.

Примечание: количество и исполнение тумбы определяются при заказе по согласованию с заказчиком.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 32 из 52

2.5 Маркировка

2.5.1 Маркировка тумбы соответствует ГОСТ 16371, ГОСТ Р 50444 и ГОСТ Р ИСО 15223-1.

2.5.2 На каждом изделии прикреплена этикетка, на которой указано:

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя ;
- наименование изделия, его исполнение;
- обозначение изделия (артикул);
- наименование страны-изготовителя;
- дата изготовления: месяц и год ;
- гарантийный срок эксплуатации;
- срок службы;
- заводской номер ;
- обозначение технических условий, ГОСТ 16371.

ООО «ВИТА»	
 Юридический адрес: 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206	ГОСТ 16371-2014 ТУ 32.50.30-002-48837523-2019 Изготовлено в Российской Федерации
Тумба медицинская (Артикул) по ТУ 32.50.30-002-48837523-2019	
Дата изготовления:20	Порядок применения, гарантия изготовителя: см. Инструкцию по применению ПТИС.324514.001 И
Заводской номер:  XXXXXX	
Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца	
Срок службы: 4 года	
Транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100%. Хранить в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.	

Рисунок 27 – Шаблон маркировки тумбы

2.5.3 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.

Транспортная маркировка нанесена на бумажные или картонные ярлыки, или непосредственно на тару, ярлыки прикрепляют к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

На каждую транспортную тару нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям:

«Хрупкое. Осторожно» 

«Бережь от влаги» 

«Верх» 

Допускаются иные информационные знаки и надписи.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 33 из 52

2.6 Упаковка

2.6.1 Упаковка соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371 и конструкторской документации.

2.6.2 Эксплуатационная документация помещена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена в упаковку.

2.6.3 Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту тумбы от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 34 из 52

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 По санитарно-химическим, токсикологическим и биологическим показателям тумба соответствует требованиями ГОСТ Р 52770, стандартов серии ГОСТ ISO 10993, а также нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

3.2 Уровни летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуатации тумбы в воздух помещений, соответствуют ГОСТ 16371, и не превышают допустимый уровень, а именно: аммиака – не более 0,04 мг/м³; спирта метилового – не более 0,5 мг/м³; формальдегида – не более 0,01 мг/м³; фенола – 0,003 мг/м³. Класс эмиссии формальдегида древесно-стружечных плит – E1.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 35 из 52

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Эксплуатационные ограничения

 Каждое изделие проходит перед продажей специальную проверку изготовителем. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством тумбы.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния комплектующих тумбы, чтобы убедиться в отсутствии различных вмятин, сколов, порезов и повреждений от ударов. Если Вы обнаружите повреждения, обратитесь к Изготовителю.

Рабочие условия окружающей среды:

Температура от плюс 10 до плюс 35 °С.

Относительная влажность воздуха: до 80 %.

4.2 Подготовка к эксплуатации

При использовании изделия впервые после его приобретения проверьте соответствие комплектности по разделу 2.4 настоящей инструкции по применению.

Использование изделия не требует специального обучения и может быть выполнено силами пользователя.

Освободите тумбу от упаковки, выбросьте упаковочный материал.

Установите тумбу на ровной гладкой поверхности, при необходимости, отрегулируйте опоры тумбы по высоте. Тумба должна стоять ровно и устойчиво.

4.3 Порядок работы с изделием

 Перед первым использованием рекомендуется осуществить дезинфекцию в соответствии с требованиями раздела 5.

Используйте тумбу в соответствии с ее функциональным назначением.

Примечание: Следует учитывать информацию по рекомендуемой нагрузке п. 2.1.8.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 36 из 52

5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

5.1 Техническое обслуживание

При эксплуатации тумба не требует технического обслуживания. Тем не менее, необходимо регулярно контролировать отсутствие механических повреждений частей тумбы при внешнем осмотре.

Так же необходимо обеспечивать очистку и дезинфекцию тумбы.

5.2 Уход и дезинфекция

Ежедневно необходимо обеспечивать влажную уборку - 3 раза в день, из них - 2 раза с использованием моющего средства, третий раз - с применением дезинфицирующего средства.

Внешние и внутренние доступные поверхности тумбы протрите салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе или моющим средством, затем протрите насухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется использовать 3 % раствор перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644, 1 % раствором хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003 или иными средствами согласно МУ 287-113.

 Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за тумбой.

 Не следует ставить на столешницу тумбы и полки горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 37 из 52

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Использование тумбы должно осуществляться в соответствии с настоящей инструкцией по применению ПТИС.324514.001 И.

6.2 К эксплуатации тумбы допускается медицинский персонал и пациенты, детально изучившие инструкцию по применению.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование тумбы должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444. Транспортирование тумбы может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

7.2 Условия транспортирования тумбы должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100% при температуре плюс 25 °С.

7.3 Условия хранения тумбы должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 16371: в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

8 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1 Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.7.2790.

8.2 Согласно СанПиН 2.1.7.2790 тумба относится к медицинским отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы.

8.3 Перед утилизацией тумба должна быть подвергнута санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113.

8.4 Тумба должна подлежать утилизации в случае:

- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью пользователя и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

8.5 Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 38 из 52

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Тумба медицинская производства ООО «ВИТА»

Исполнение _____

Артикул _____ Заводской номер _____

принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 39 из 52

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Тумба медицинская

Исполнение _____

Артикул _____ Заводской номер _____

упакована на предприятии-изготовителе ООО «ВИТА» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 40 из 52

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют при несоответствии поставляемого изделия, его тары, упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин повреждений необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование, артикул и заводской номер изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому оно получено;
- детальное описание повреждения;
- предполагаемая причина повреждения;
- наименование поврежденных частей и т.д.

Предприятие-изготовитель принимает рекламацию, если не установлена вина получателя в возникновении дефекта в изделии.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ИТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 41 из 52

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества тумбы требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи предприятием-изготовителем.

12.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае, если изделие не соответствует требованиям технических условий в гарантийный период, обратитесь к продавцу.

Гарантийный срок эксплуатации изделия указан в настоящей инструкции и исчисляется с даты продажи. При обнаружении несоответствия изделия требованиям технических условий покупателю гарантируется бесплатный ремонт или обмен на аналогичный товар надлежащего качества.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

- Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием, даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления;

- несовпадения заводского номера изделия с гарантийным талоном;

- наличия механических повреждений;

- несоблюдения правил эксплуатации изделия и т.д.

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 42 из 52

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
на замену в течение гарантийного срока

Тумба медицинская производства ООО «ВИТА»

Исполнение _____

Артикул _____ Заводской номер _____

Приобретена _____

(дата, подпись и штамп покупателя)

Продавец _____

(подпись, печать)

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 43 из 52

ПРИЛОЖЕНИЕ А.
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Таблица А.1

Обозначение документа, на который дана ссылка	Наименование документа
-	Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации № 4н от 06.06.2012 «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»
ГОСТ 2.106-96	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Текстовые документы
ГОСТ 2.601-2013	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы
ГОСТ 2.610-2006	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов
ГОСТ 9.032-74	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.
ГОСТ 9.301-86	ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования.
ГОСТ 9.303-84	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия.
ГОСТ 5632-2014	Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия
ГОСТ 20400-2013	Продукция мебельного производства. Термины и определения
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 32289-2013	Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 44 из 52

Обозначение документа, на который дана ссылка	Наименование документа
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации
МУ 287-113-98	Методические указания по дезинфекции, стерилизации изделий медицинского назначения
СанПиН 2.1.7.2790-10	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
серия ГОСТ ISO 10993-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий
ТУ 9392-031-00203306-2003	Средство дезинфицирующее «Хлорамин Б»

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 45 из 52

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

№	Наименование изделия	Где используется. Специальные медицинские помещения	Назначение	Размещаемые мед. изделия
1.	Тумба медицинская с дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-001)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
2.	Тумба медицинская с четырьмя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-002)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала и медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинские инструменты
3.	Тумба медицинская с выдвижным ящиком, дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-003)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
4.	Тумба медицинская с двумя выдвижными ящиками, дверью и усиленной столешницей (Арт. Т-004)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные,	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды,	перевязочный материал, медицинская посуда,

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 46 из 52

		палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	медицинских инструментов	медицинские инструменты
5.	Тумба медицинская с двумя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-005)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
6.	Тумба медицинская с дверью (Арт. Т-008)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
7.	Тумба медицинская с четырьмя выдвижными ящиками (Арт. Т-009)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала и медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинские инструменты
8.	Тумба медицинская с выдвижным ящиком и дверью (Арт. Т-010)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные	для хранения перевязочного материала,	перевязочный материал, медицинская

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 47 из 52

		кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	медицинской посуды, медицинских инструментов	посуда, медицинские инструменты
9.	Тумба медицинская с полкой и дверью (Арт. Т-011)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
10.	Тумба медицинская с тремя выдвижными ящиками и усиленной столешницей (Арт. Т-012)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала и медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинские инструменты
11.	Тумба медицинская с тремя выдвижными ящиками (Арт. Т-013)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала и медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинские инструменты

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 48 из 52

12.	Тумба медицинская передвижная кабинетная с дверью (Арт. ТП-001)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
13.	Тумба медицинская передвижная кабинетная с тремя выдвижными ящиками (Арт. ТП-002)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала и медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинские инструменты
14.	Тумба медицинская передвижная с двумя выдвижными ящиками (Арт. ТП-003)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
15.	Тумба медицинская передвижная двусторчатая (Арт. ТП-004)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 49 из 52

		бактериологические помещения		
16.	Тумба медицинская передвижная кабинетная с полкой и дверью (Арт. ТП-005)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
17.	Тумба медицинская передвижная с полкой, дверью и столешницей (Арт. ТП-006)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
18.	Тумба медицинская передвижная одностворчатая (Арт. ТП-008)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные клиничко-диагностические и бактериологические помещения	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
19.	Тумба медицинская передвижная с тремя выдвижными ящиками (Арт. ТП-009)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные	для хранения перевязочного материала и медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинские инструменты

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 50 из 52

		клинико-диагностические и бактериологические помещения		
20.	Тумба медицинская передвижная с полкой и дверью (Арт. ТП-010)	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов	перевязочный материал, медицинская посуда, медицинские инструменты
21.	Тумба медицинская передвижная с двумя дверями (Арт. ТП-011)	клинико-диагностические и бактериологические помещения	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов
22.	Тумба медицинская с двумя дверями (Арт. ТП-012)	клинико-диагностические и бактериологические помещения	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной терапии, лабораторные	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов
23.	Тумба медицинская с четырьмя ящиками двухсекционная (Арт. ТП-013)	клинико-диагностические и бактериологические помещения	Манипуляционные, процедурные и перевязочные кабинеты, стерилизационные, палаты интенсивной	для хранения перевязочного материала, медицинской посуды, медицинских инструментов

ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206 Тел.: 8 423 279-59-49; e-mail: vita@vita-vdk.ru	Документ: ПТИС.324514.001 И
	Версия: 1.3
	Страница: 51 из 52

		терапии, лабораторные клинико- диагностические и бактериологические помещения	медицинских инструментов	
--	--	--	-----------------------------	--

Лист регистрации изменений

[illegible]

г. Владивосток

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 52 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «Вита»

Иванов И.И.
« 31 » сентября 20 23 г.

