

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«30» августа 2023 г.




ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77АД 1754197
КУСАЙЛО Р. В.


Фотографические изображения изделия:


Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro

Zybio Inc. («Зибิโอ Инк.»), Китай

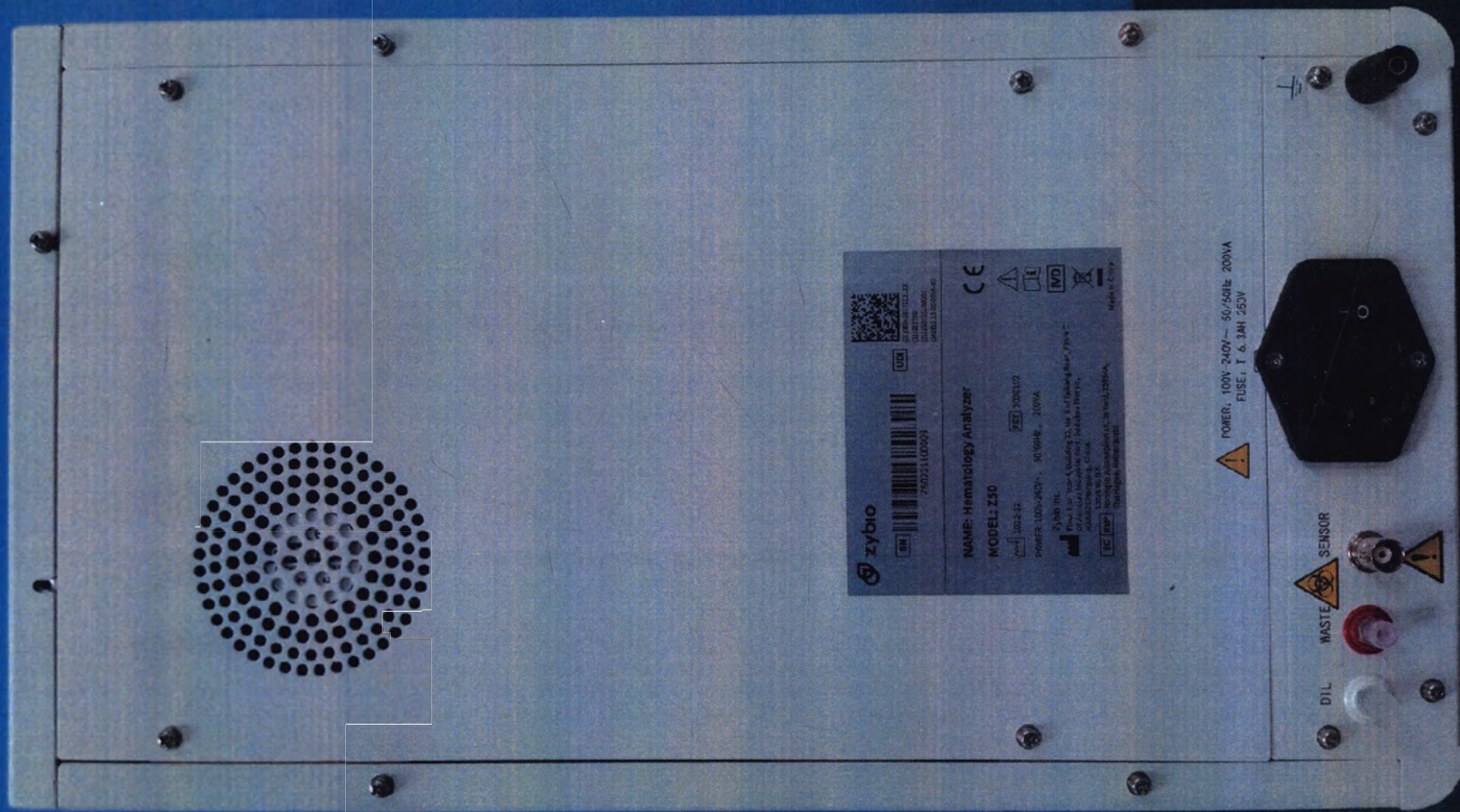




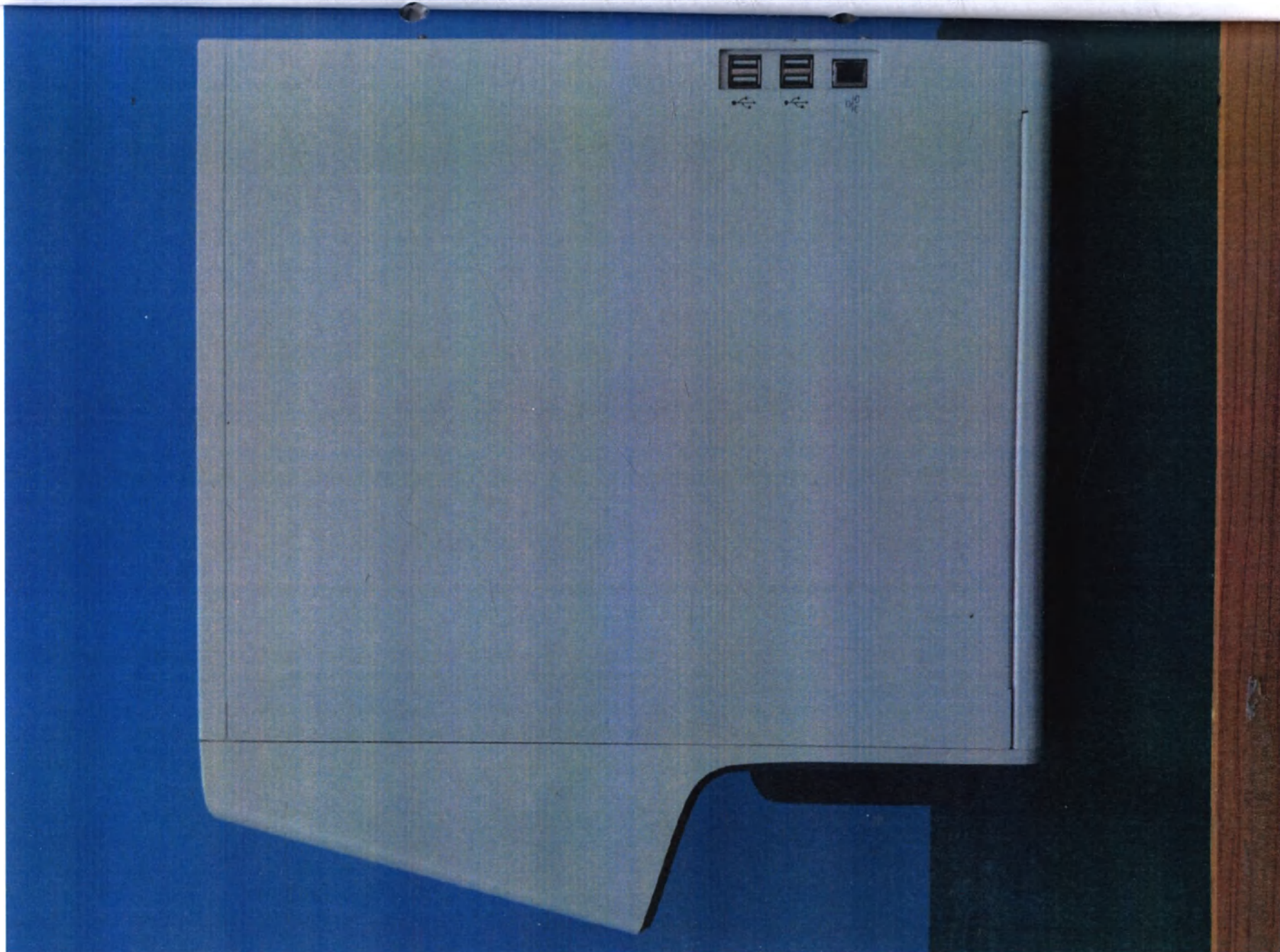

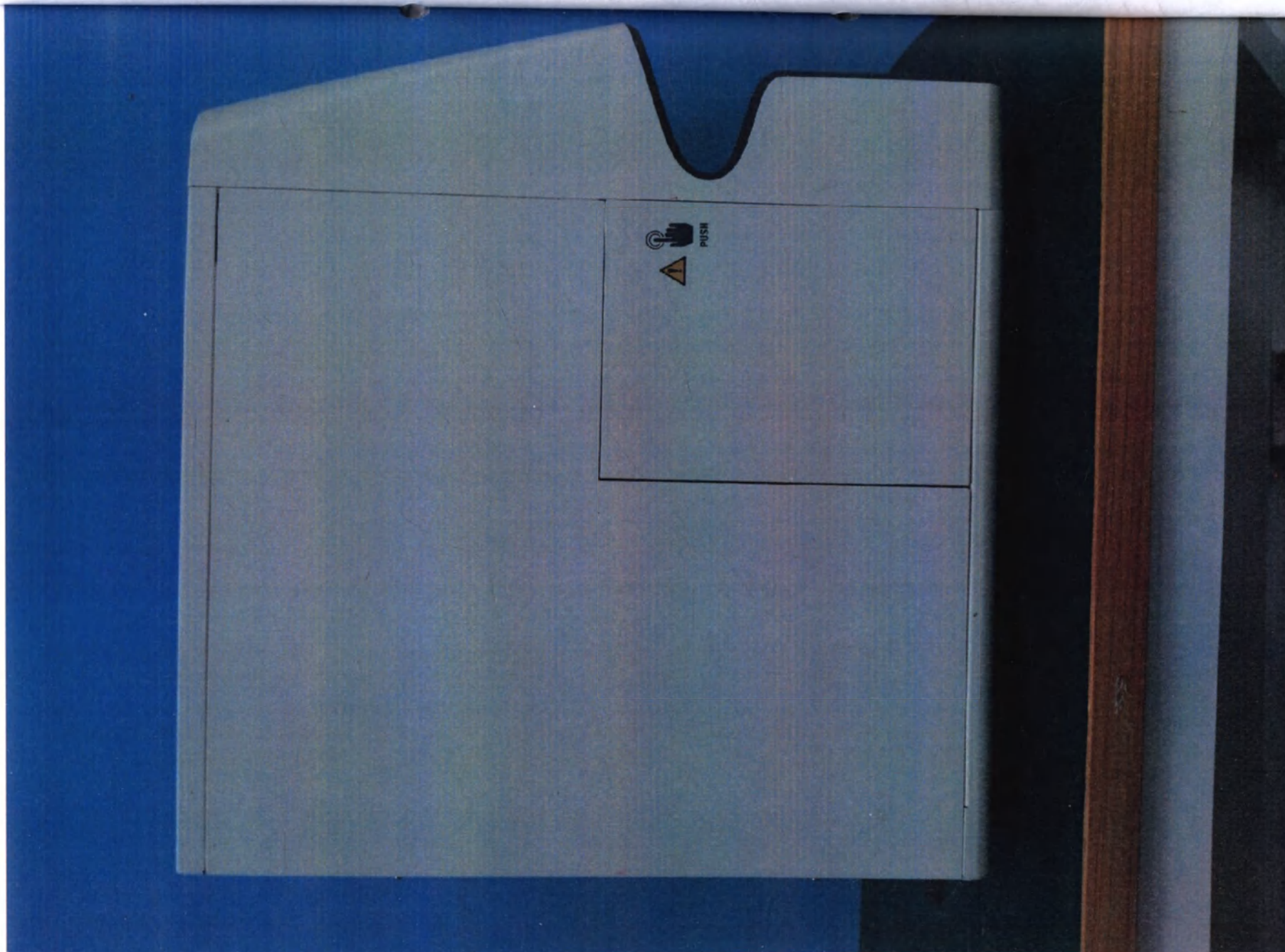

Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в варианте исполнения Z50

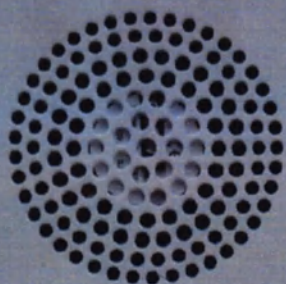

zybio

252221100016

NAME: Hematology Analyzer
MODEL: Z52

POWER: 100V-240V~, 50/60Hz, 230VA

CE

WARNING: High Voltage

CAUTION: Hot Surface


MADE IN CHINA


POWER: 100V-240V~ 50/60Hz 230VA
FUSE: 1 e. 3AH 250V


DIL WASTE SENSOR

CAUTION: Hot Surface



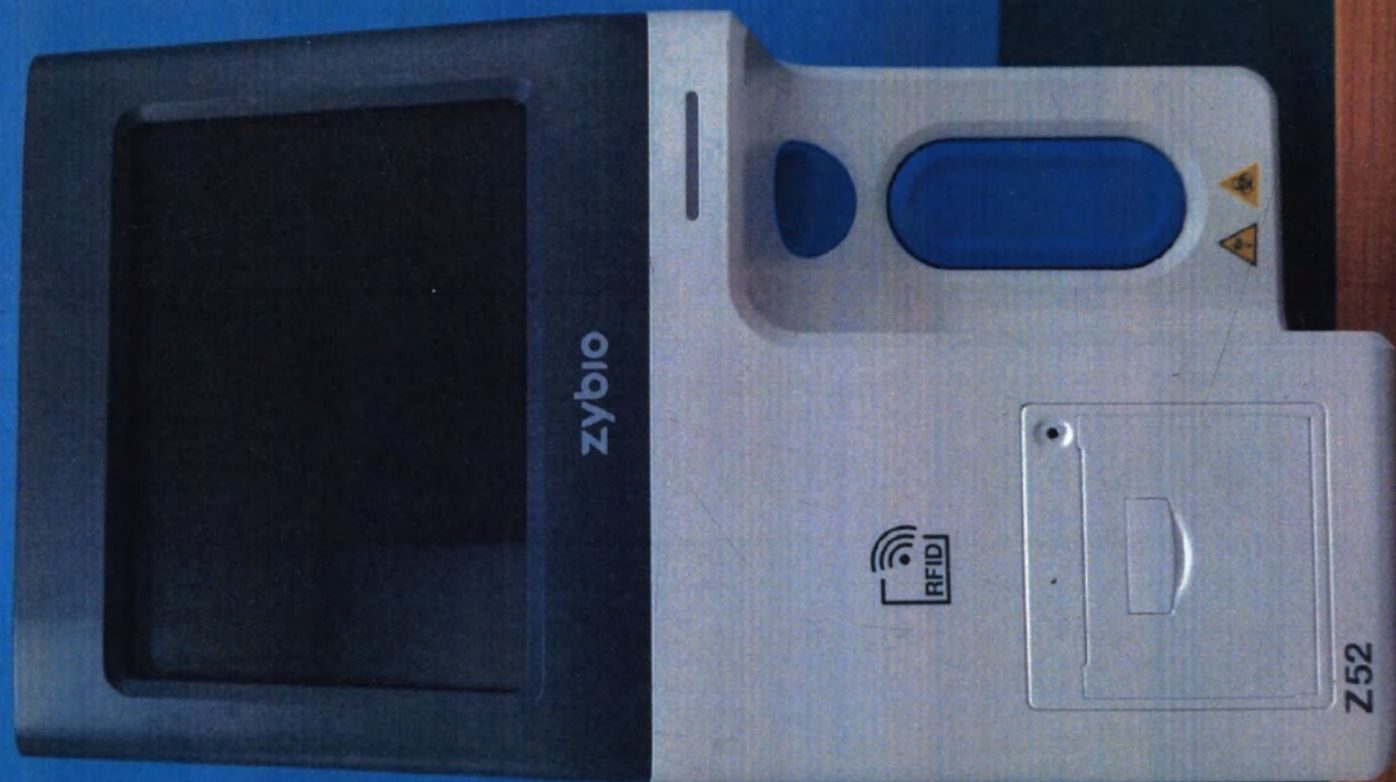

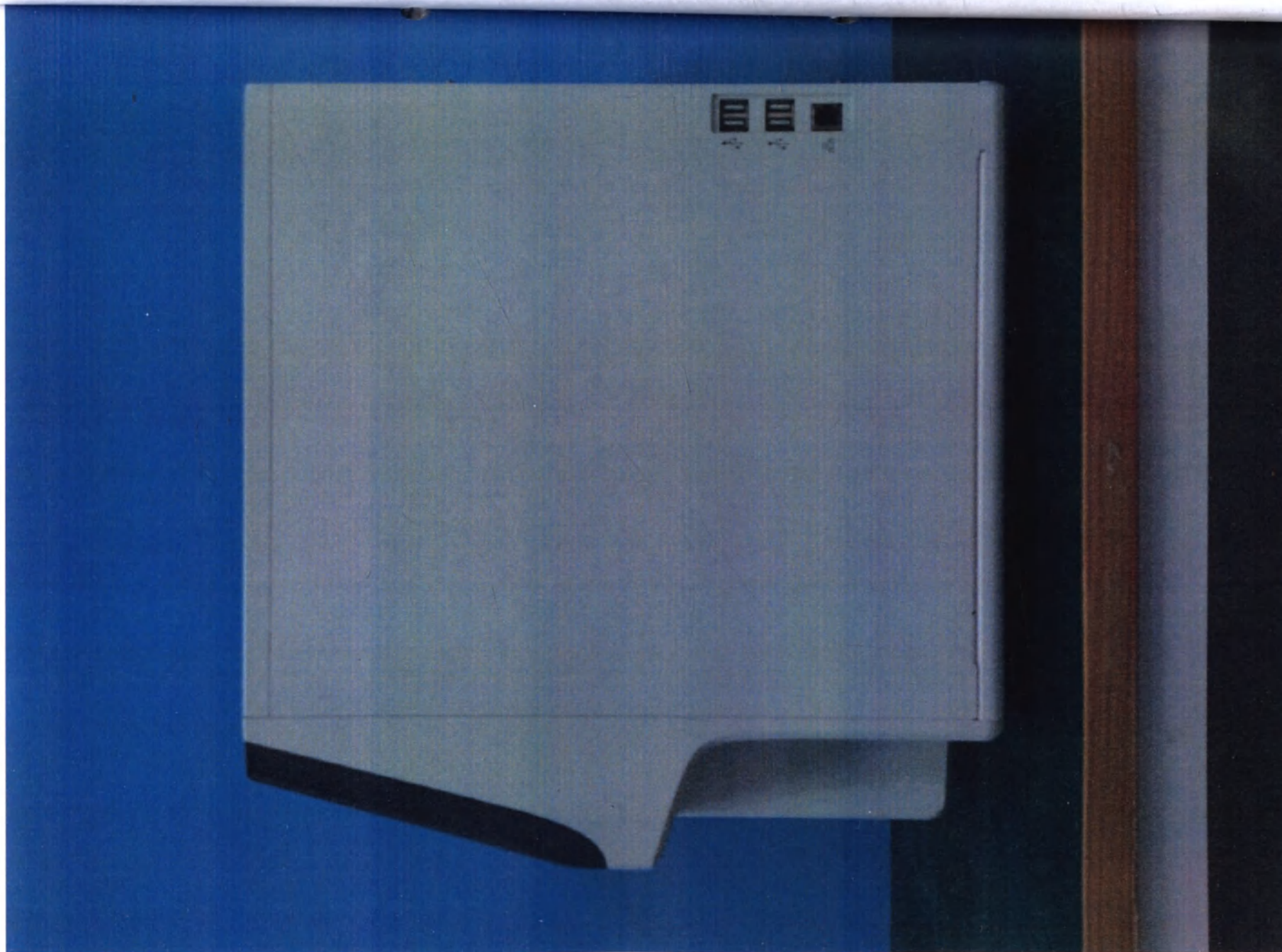

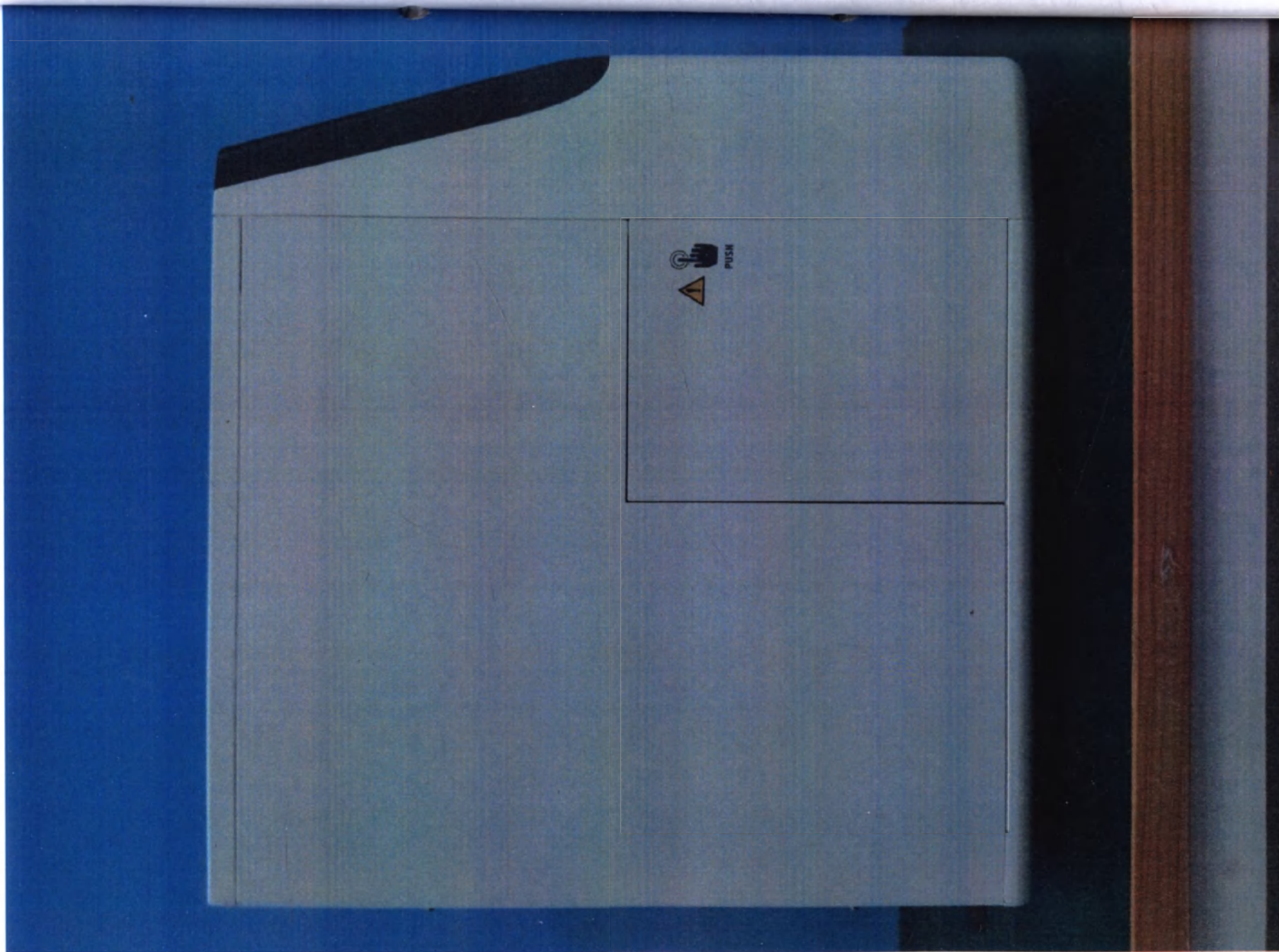

Анализатор автоматический гематологический для диагностики in vitro, в варианте исполнения Z52




Кабель питания




Предохранитель Т6.3АН250V




Контейнер для отходов

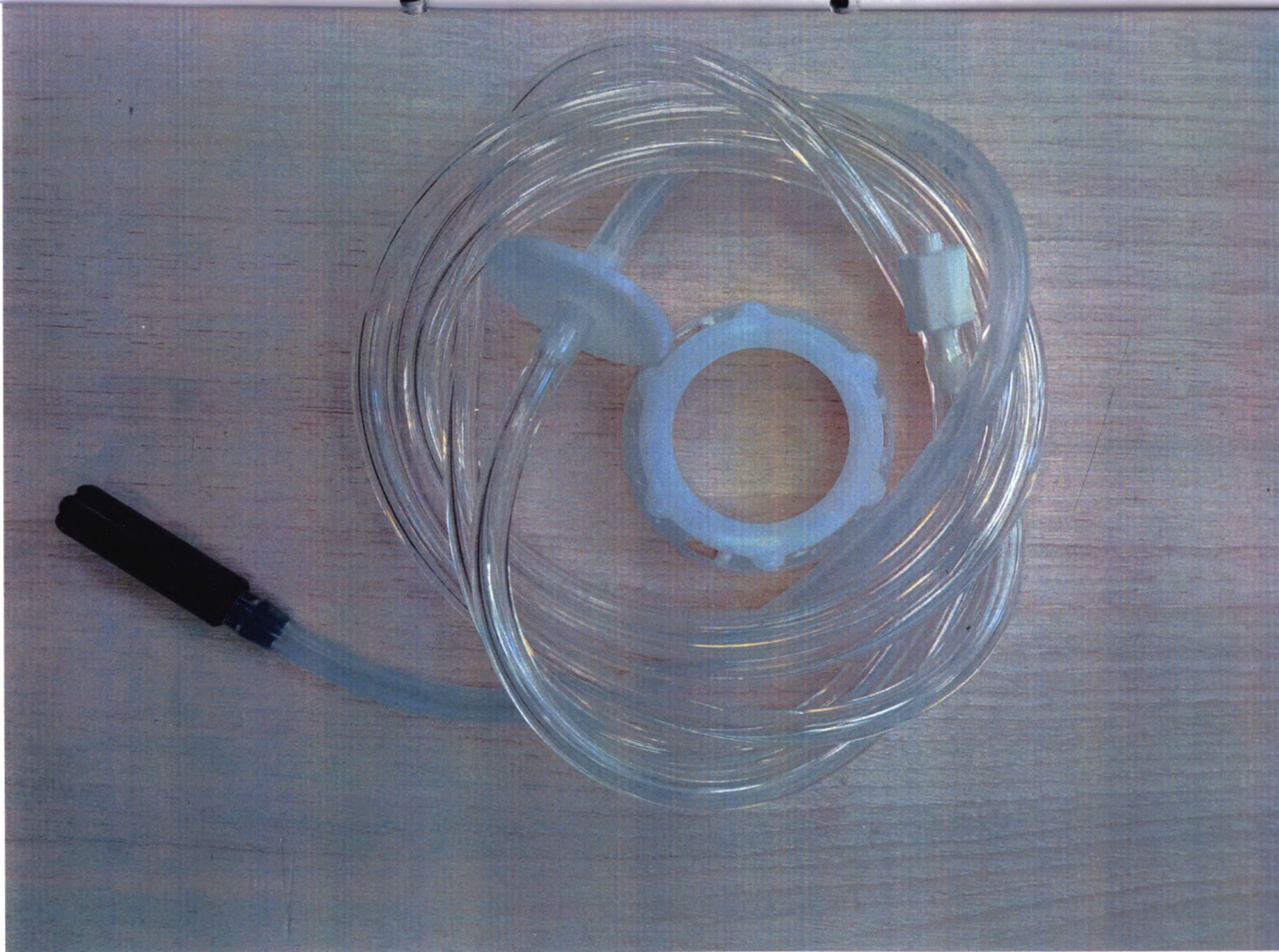

Переходная трубка для разбавителя

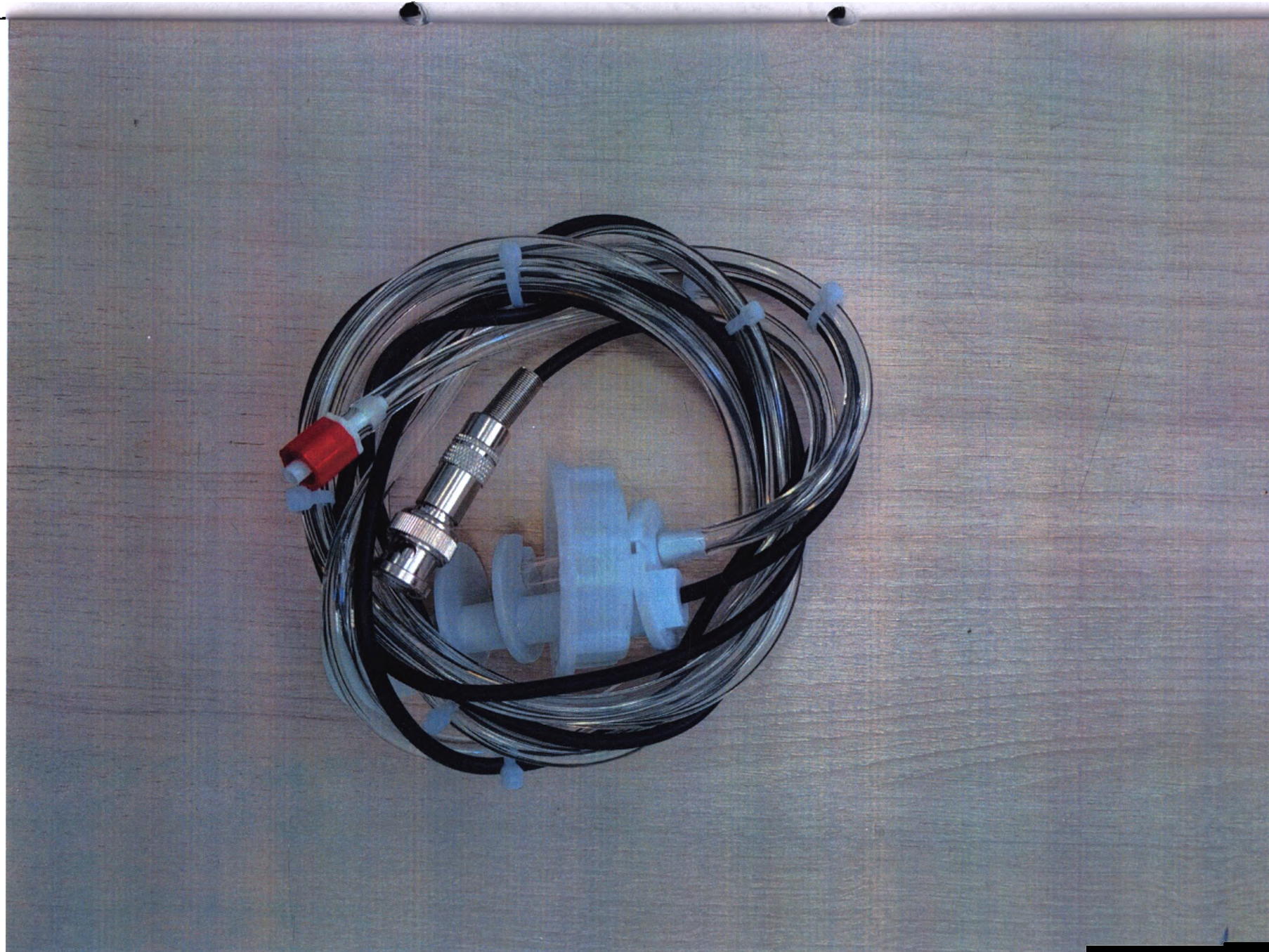


Переходная трубка для отходов

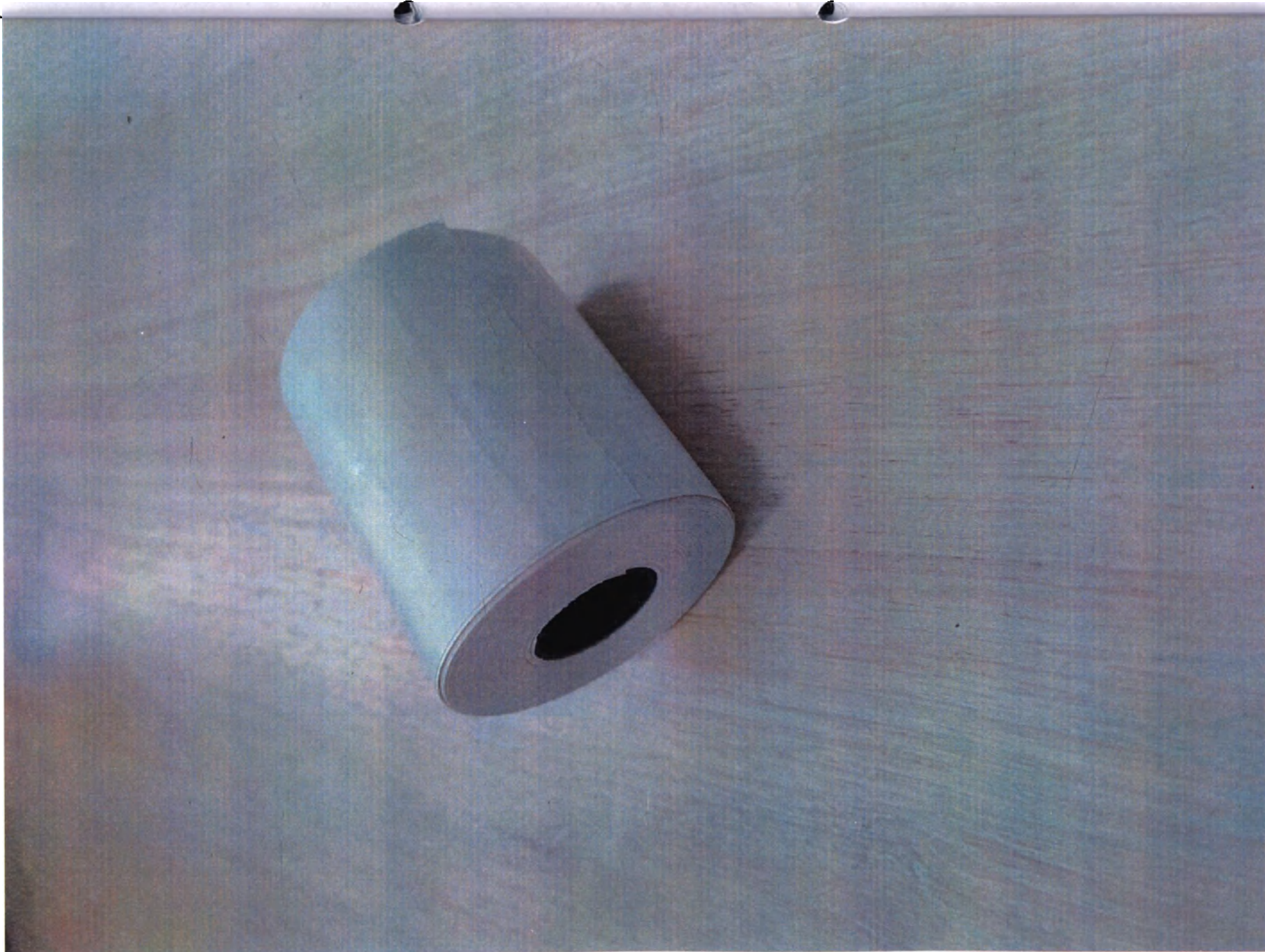


Бумага для термопринтера


Компоненты для обслуживания, в составе:

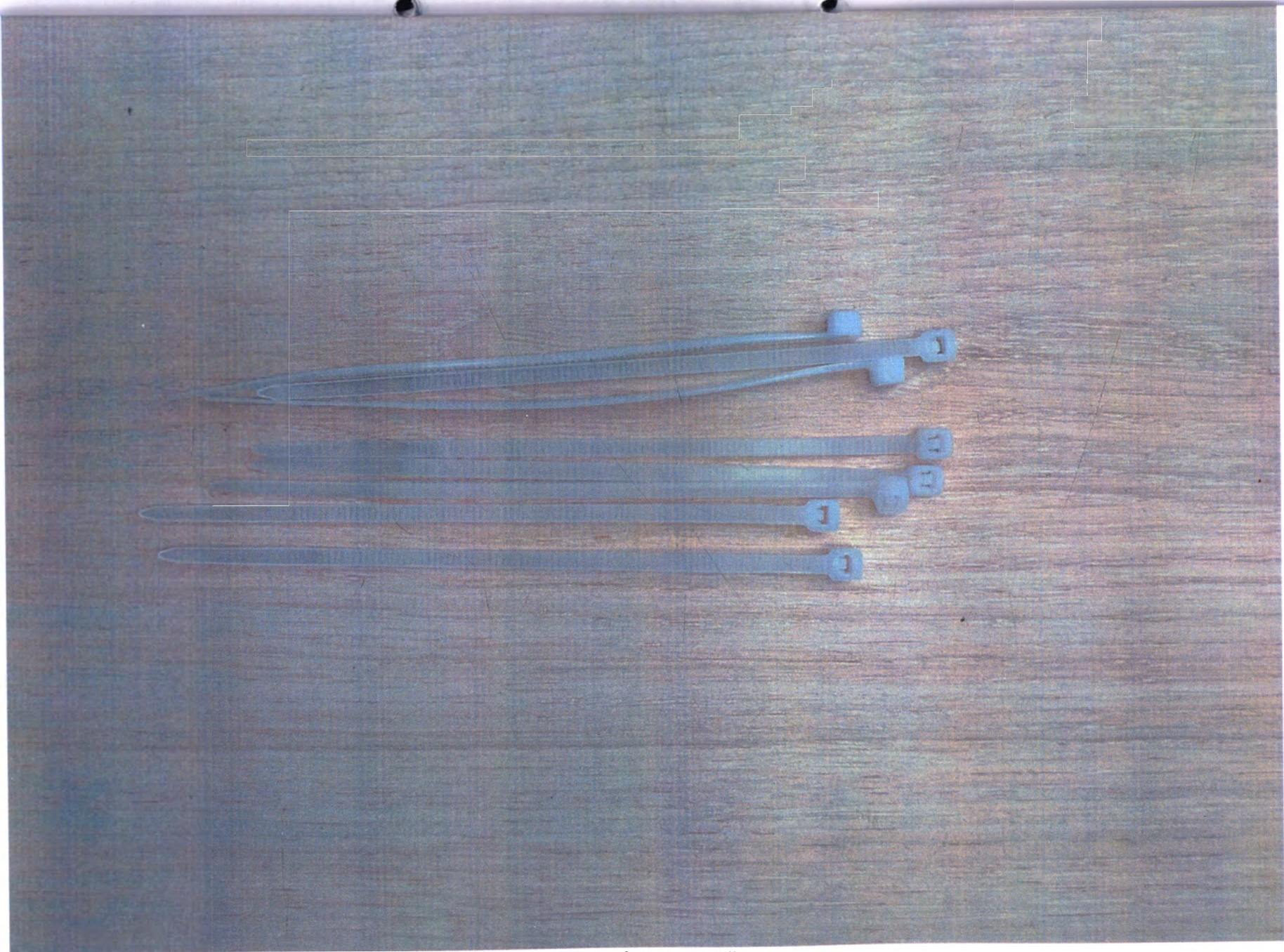


Ремень фиксирующий

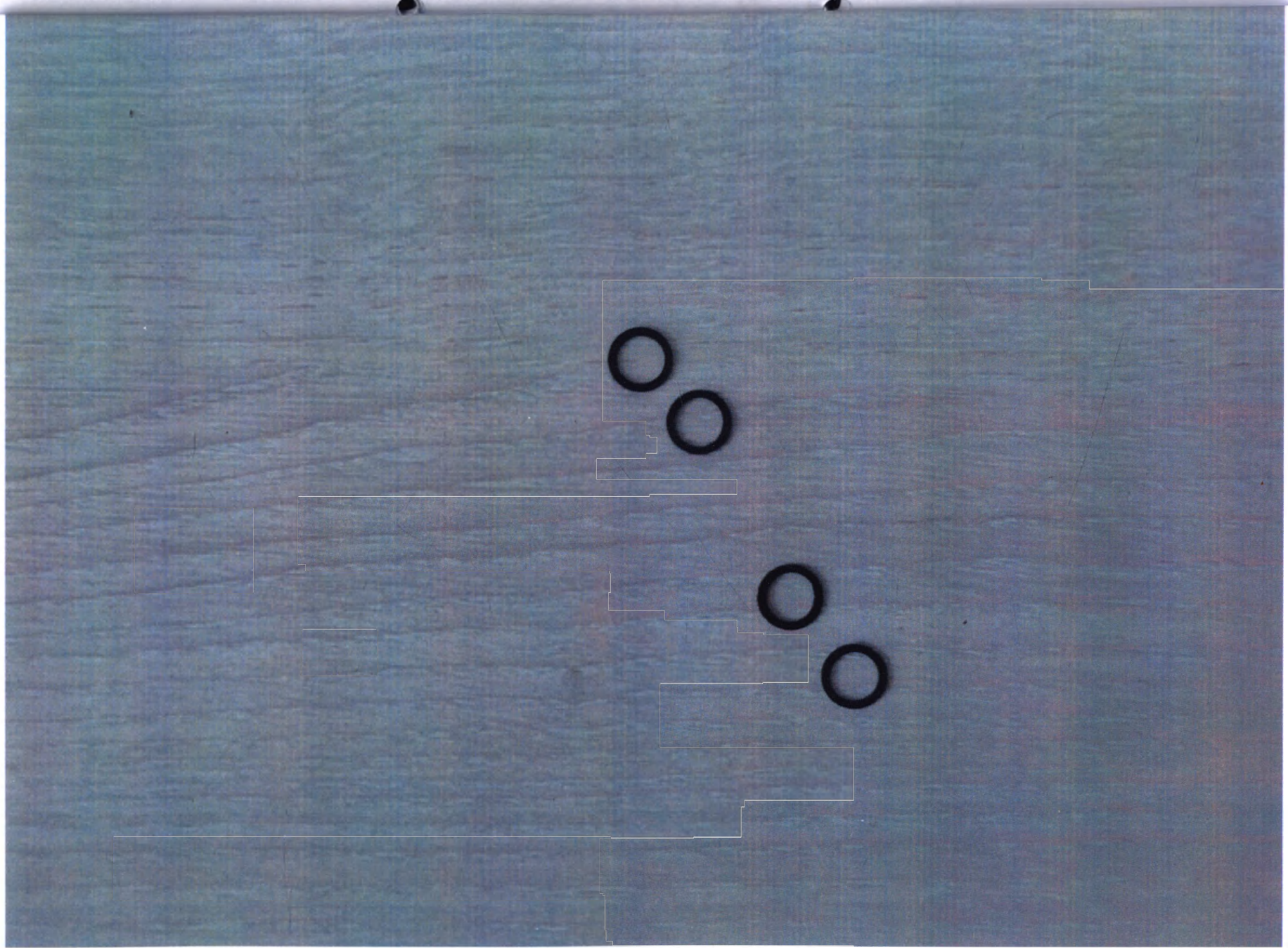


Кольцо апертуры 0-образное

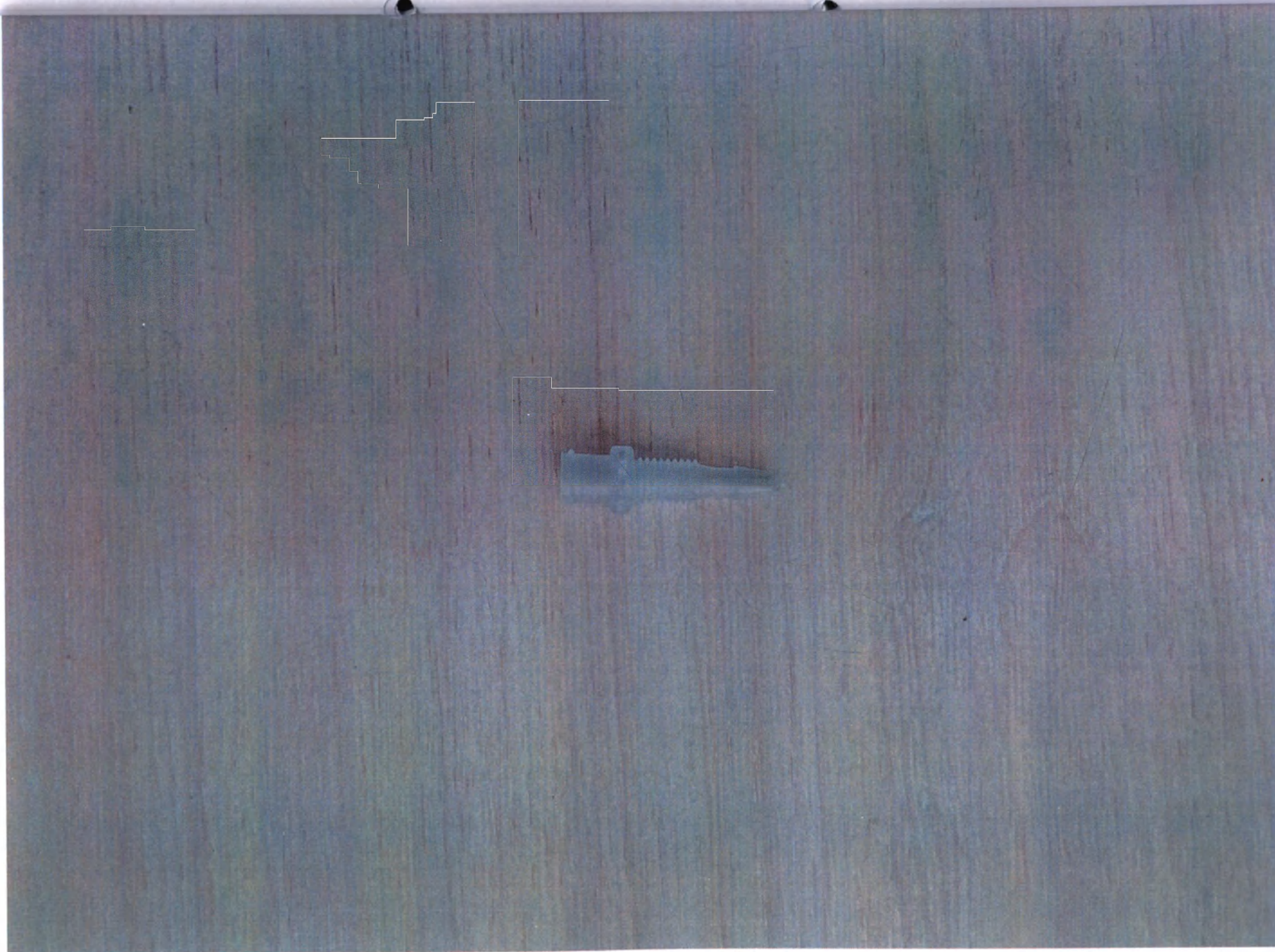


Коннектор жидкостный

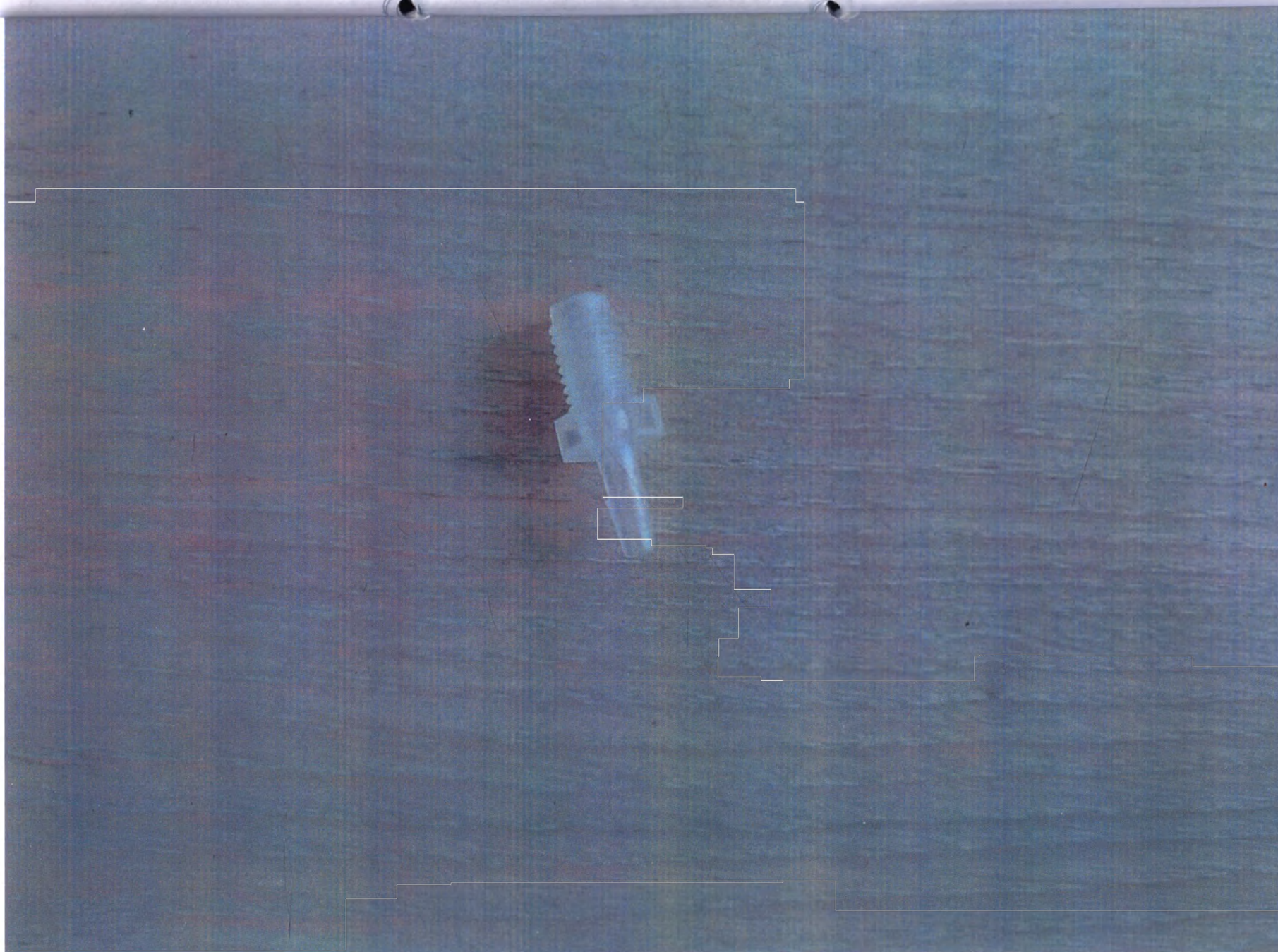


SP-коннектор

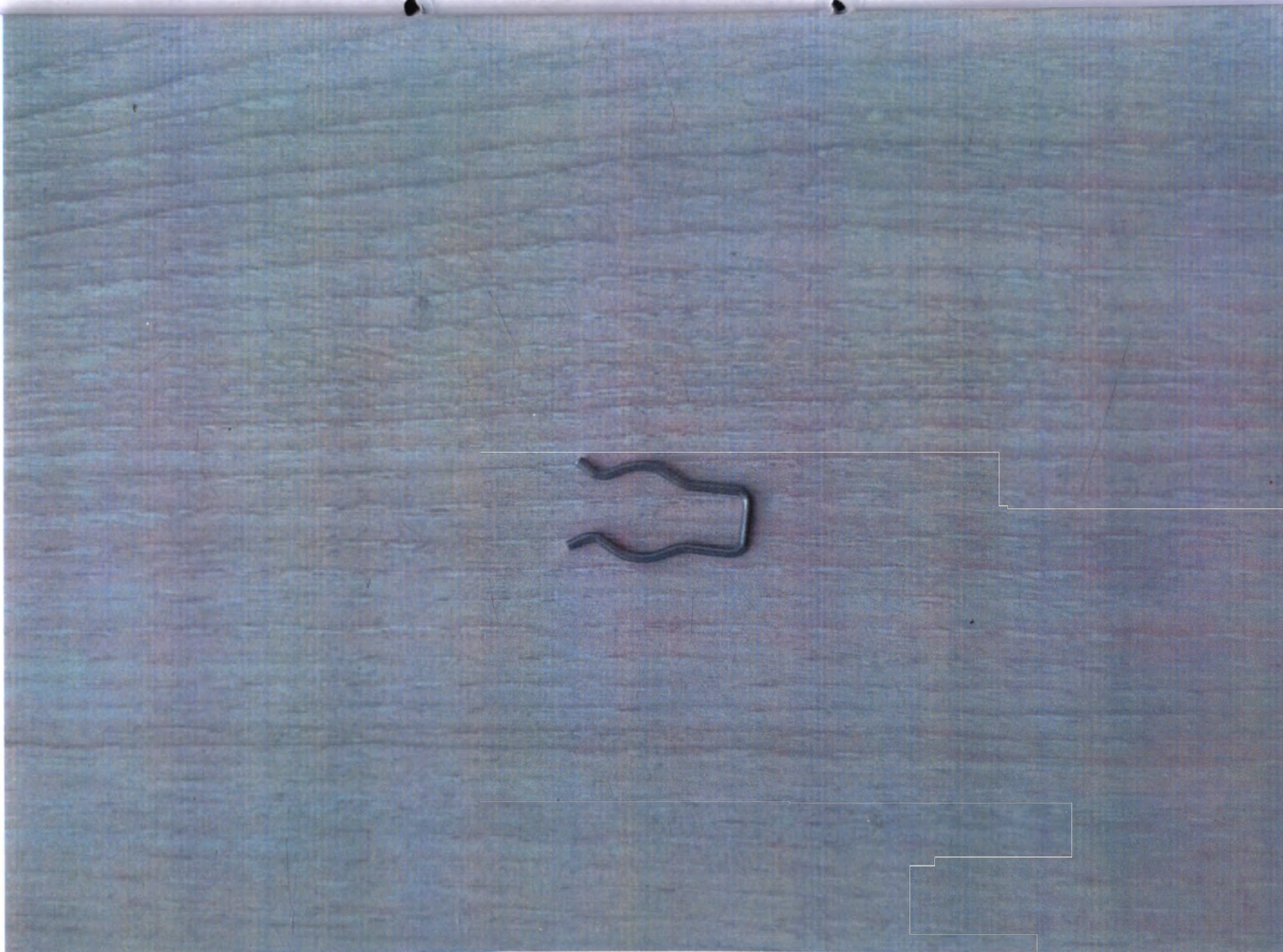


Зажим для набора промывки

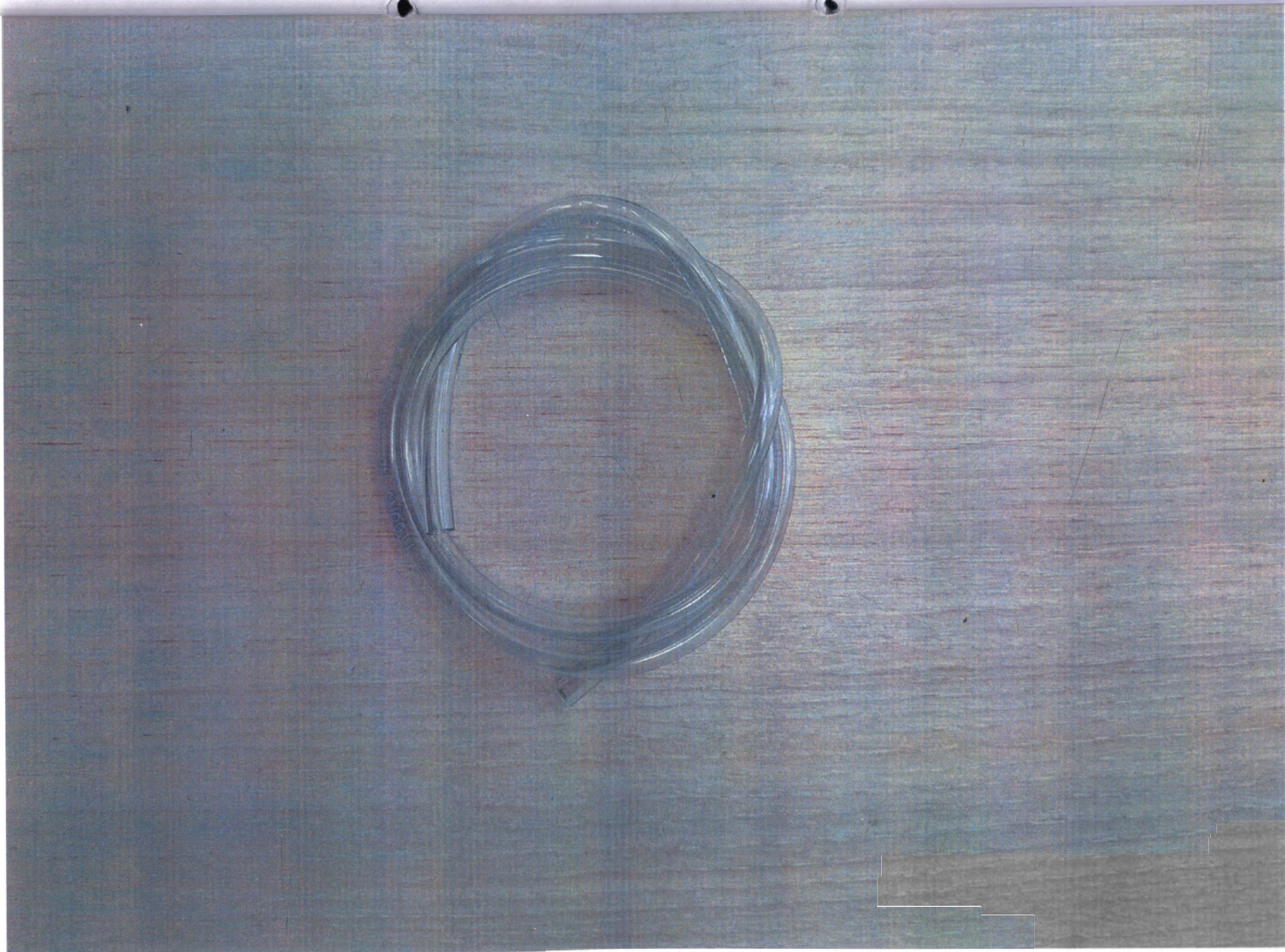

Трубка из ПВХ (толстая)

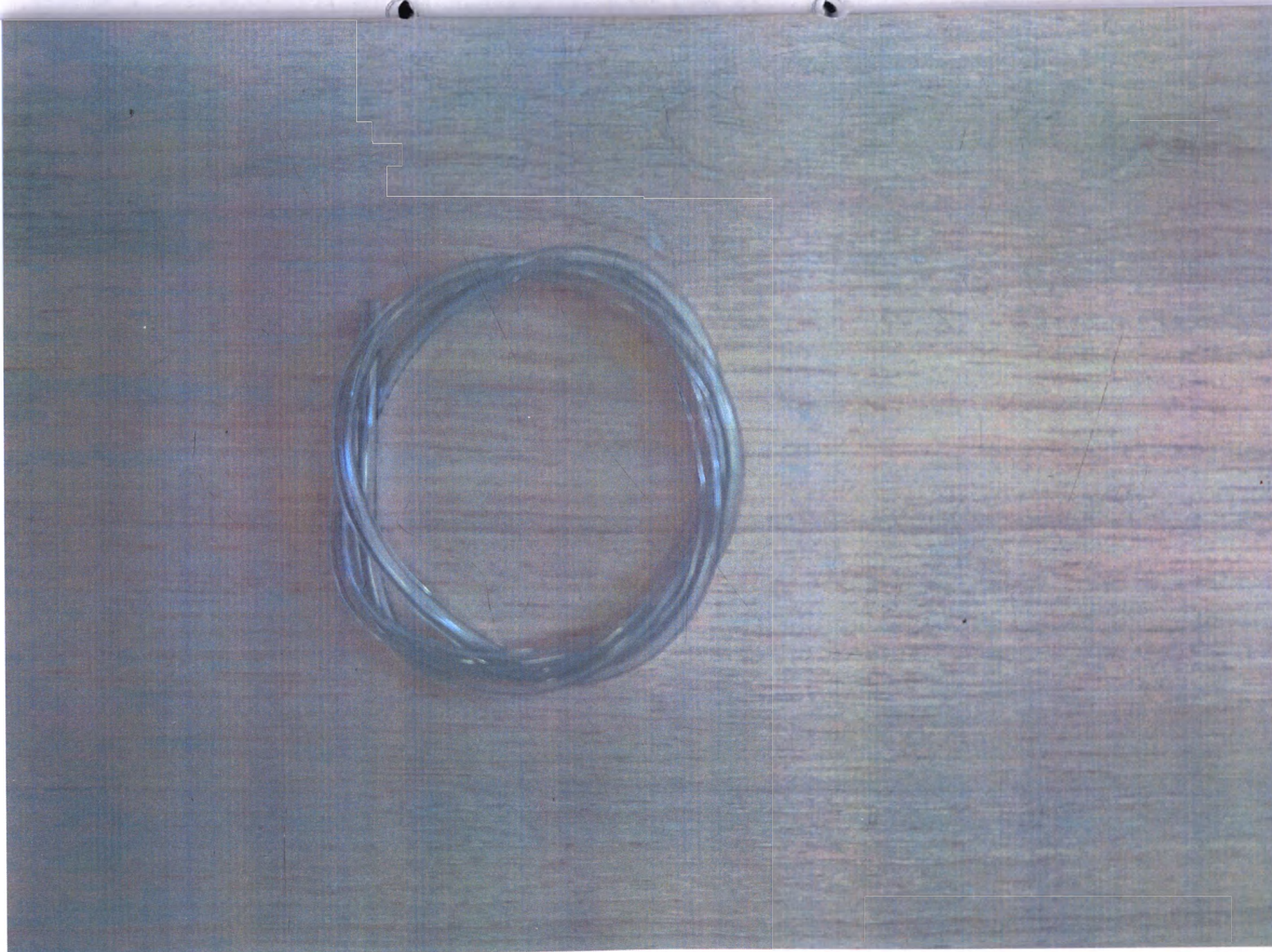

Трубка из ПВХ (тонкая)

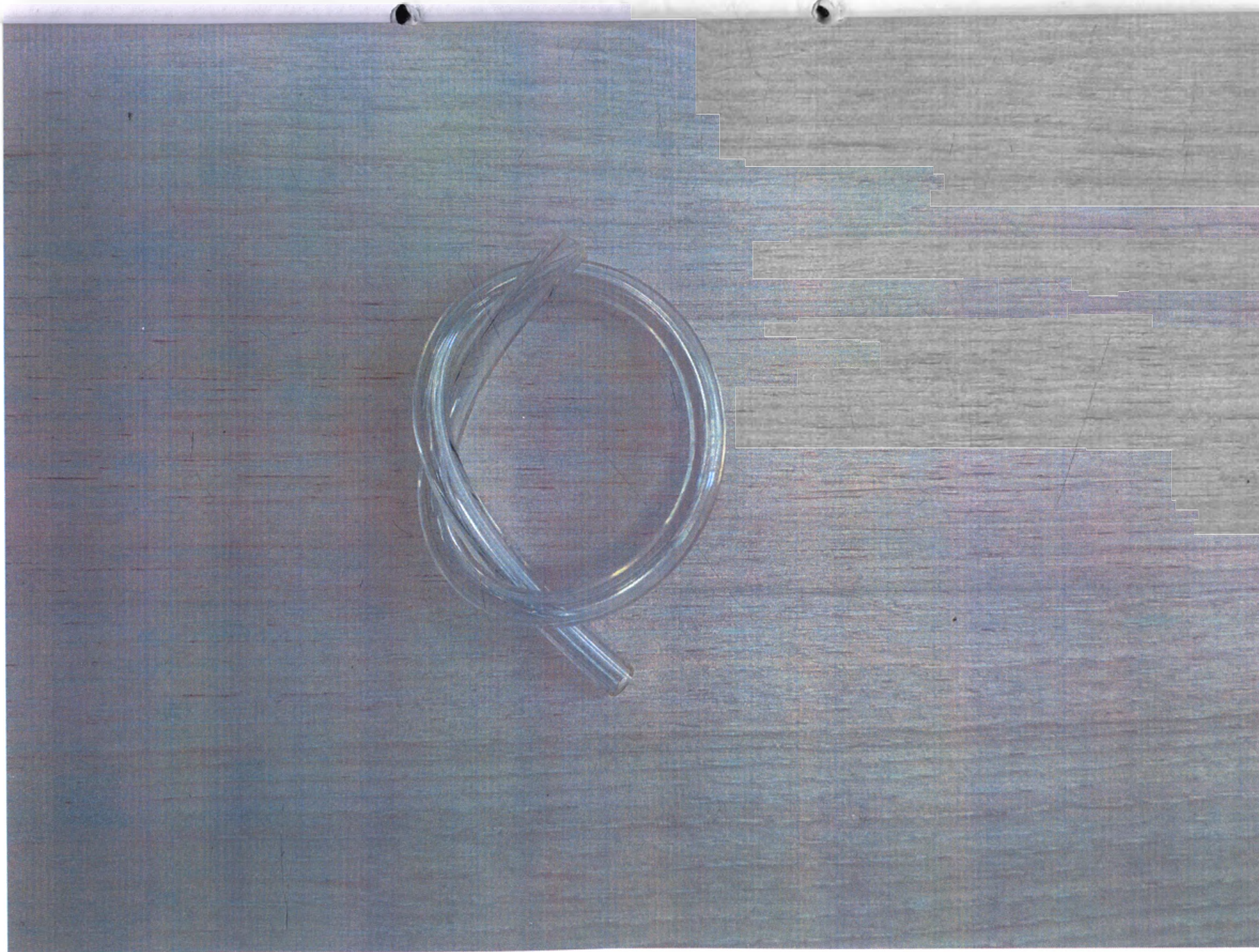


Трубка ТПУ



Отвертка




Провод для заземления

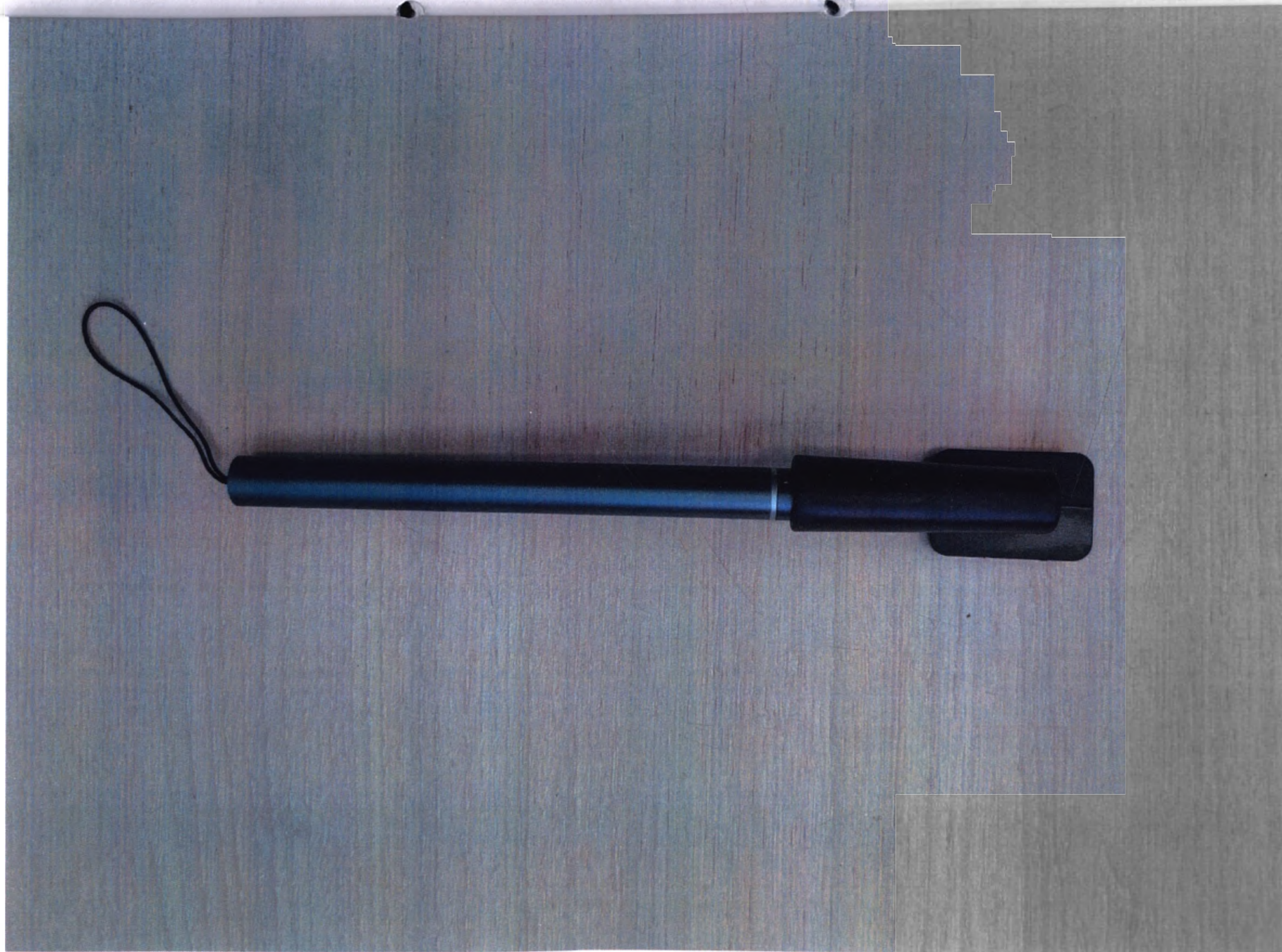

Стилус




RFID-считыватель (Производитель: Shenzhen lai card technology Co., Ltd., торговая марка: Zybio, номер по каталогу: 02-54-00-7011-00)

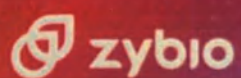

Z50 Series Hematology Analyzer

Operation Manual

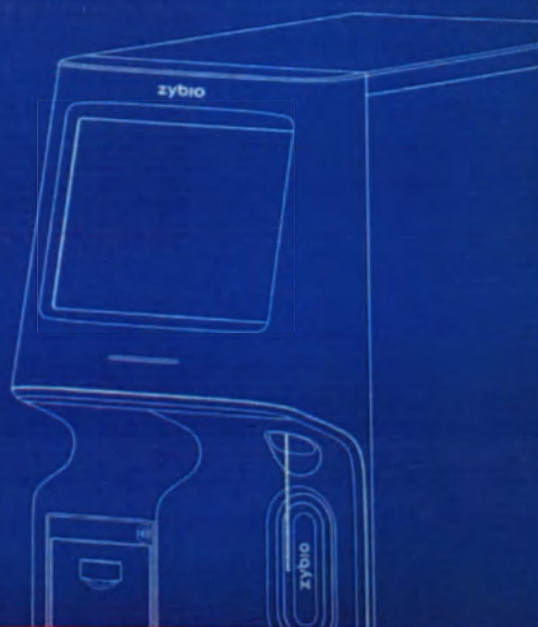

Hematology

www.zybio.com

Руководство по эксплуатации

Стр. 29 из 33

1. Appearance Description



2. Daily Operating Process


- STEP 1 Preparation
- STEP 2 Startup
- STEP 3 Daily L-J QC
- STEP 4 Sample Preparation
- STEP 5 Sample Analysis
- STEP 6 Result Review
- STEP 7 Shutdown

2.1 Preparation

- Check the waste bucket and make sure it is not full.
- Check the reagents to see if the reagents are expired, frozen, or enough.
- Check the thermal printer and make sure enough printer paper is installed.

2.2 Startup

1. Press power switch at the back of the analyzer.
2. Input **username** and **password**. (Default: Username: admin Password: admin)

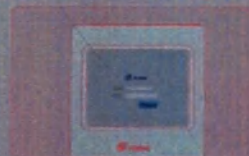

2.3 Daily L-J QC

1. Tap the menu option "QC" to "L-J QC" to "Setting".
2. Enter the "L-J QC setting" interface. Tap "New", or select a QC file without QC results.
3. Enter the expiration date of the lot.
4. Select "control level", "control type" and "QC mode" and set "QC sample ID".
5. Enter the target and limits in the edit boxes according to the package insert of the lot of controls.

6. Take out one level of control from the refrigerator and handle it as the control insert.

7. Run control under the "QC" interface and review the "QC graph" or "QC table".

2.4 Sample Preparation

- The analyzer can run 3 types of sample: venous whole blood, capillary whole blood and preformed samples.
- Venous whole blood: collect at least 0.5 mL EDTA-K₂ or EDTA-K₃ whole blood and run it within 15 min to 8 hours after being collected to ensure the accuracy of the results.
- Capillary whole blood: collect at least 100 μ L whole blood and run it within 5 min to 2 hours after being collected to ensure the accuracy of the results.
- Blood samples shall be mixed as shown in the following figure.




Figure 1: Mix the blood sample for at least 3 times.




Figure 2: Mix and mix well (used for capillary whole blood).

Hematology Analyzer Installation Guide

1. Take out the instrument from the cargo box. Remove these screws in the red circle like following picture shows.

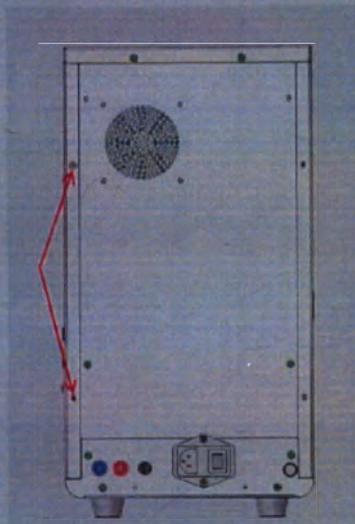

2. Remove right side cover. (Like following picture shows.)

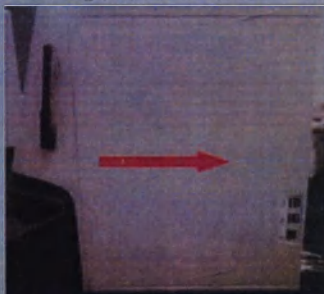

3. Cut the fixing belt, which fixes sampling system. (Don't hurt the black motor belt.) Then, remove the shielding paper on chambers shielding box.





Сертификат качества



FileName: Hematology Analyzer Packing List Document ID: H-02-70-08-1008-01-01
Version:01

Hematology Analyzer Packing List

Product Name	Hematology Analyzer	Type	250	SN	250230/00150
--------------	---------------------	------	-----	----	--------------

No.	Name	Qty.	Unit	Confirmed Result
1.	Hematology Analyzer	1	PCS	✓
2.	Power Cable	1	PCS	✓
3.	Fuse	2	PCS	✓
4.	Waste Container	1	PCS	✓
5.	Diluent Adapter Tube	1	PCS	✓
6.	Waste Float Adapter Tube	1	PCS	✓
7.	Thermal Printer Paper (57*50 mm)	1	PCS	✓
8.	Maintenance Accessories	1	PCS	✓
9.	Ground Lead	1	PCS	✓
10.	Stylus Pen	1	PCS	✓
11.	RFID Reader	1	PCS	✓
12.	Operation Manual	1	PCS	✓
13.	Operation Guide	1	PCS	✓
14.	Certificate of Quality	1	PCS	✓
15.	Installation Guide	1	PCS	✓
16.	Packing List	1	PCS	✓

Packer: PR001
Check: PR002

QC: 08
Date: 2023-02

P/N: 02-70-08-1008-01[01]

FileName: Packing List ID: S0P400-F61 Version: 01 Effective date: 2022.01.30 Page: 4 / 4

Упаковочный лист

Стр. 33 из 33

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 33 листа (-ов)

Генеральный директор _____ Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРНОСТИ
7744 1761197
ХУСНУЛОВА

