

КОПИЯ



J DENTAL CARE S.R.L.

Via del Tirassegno 41/N

41122 Modena, Italy

www.jdentalcare.com

INSTRUCTION FOR USE
J DENTAL CARE implant system

«Approve»

J DENTAL CARE S.R.L.

General Manager

(position)

Giacomo Grandi

(name)

signature

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI MODENA**

CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY, HANDICRAFT AND AGRICULTURE MODENA

Si attesta che il sottoscrittore ha poteri di firma sui documenti e sugli atti dell'impresa a
valere negli scambi con l'estero.

We certify that the signer is a duly authorized signatory on behalf of the Company for
any documents and acts to be used in trade with foreign countries.



Il Segretario Generale /The Secretary General
o il funzionario delegato /or authorized Official

MANFREDI CINZIA

12 OTT. 2022



1. Name of medical device.

«J DENTAL CARE implant system» consisting of:

I. Dental implant - 1/6/10/12 or 20 pcs/pack, set includes:

1. Implant of the same name with a cap screw, in a vial - 1 pc.
2. Implant passport - 1 pc.
3. Instructions for use (multilingual) - 1 pc.
4. Sticker - 2 pcs.
5. Insert with warning — 1 pc.

variants of execution:

1. Dental implant JDIcon with cover screw:

IC39080	JDIcon Ø3.9 L8
IC39100	JDIcon Ø3.9 L10
IC39115	JDIcon Ø3.9 L11.5
IC39130	JDIcon Ø3.9 L13
IC39150	JDIcon Ø3.9 L15
IC39180	JDIcon Ø3.9 L18
IC39200	JDIcon Ø3.9 L20
IC43060	JDIcon Ø 4.3 L 6
IC43080	JDIcon Ø 4.3 L 8
IC43100	JDIcon Ø 4.3 L 10
IC43115	JDIcon Ø 4.3 L 11.5
IC43130	JDIcon Ø 4.3 L 13
IC43150	JDIcon Ø 4.3 L 15
IC50060	JDIcon Ø 5.0 L 6
IC50080	JDIcon Ø 5.0 L 8
IC50010	JDIcon Ø 5.0 L 10
IC50115	JDIcon Ø 5.0 L 11.5
IC50130	JDIcon Ø 5.0 L 13
IC50150	JDIcon Ø 5.0 L 15

2. Dental implant JDIcon F with cover screw:

IC39080:	JDIcon F Ø3.9 L8
IC39100:	JDIcon F Ø3.9 L10
IC39115:	JDIcon F Ø3.9 L11.5
IC39130:	JDIcon F Ø3.9 L13
IC39150:	JDIcon F Ø3.9 L15
IC39180:	JDIcon F Ø3.9 L18
IC39200:	JDIcon F Ø3.9 L20
IC43060:	JDIcon F Ø4.3 L6
IC43080:	JDIcon F Ø4.3 L8
IC43100:	JDIcon F Ø4.3 L10
IC43115:	JDIcon F Ø4.3 L11.5
IC43130:	JDIcon F Ø4.3 L13
IC43150:	JDIcon F Ø4.3 L15
IC50060:	JDIcon F Ø5.0 L6
IC50080:	JDIcon F Ø5.0 L8
IC50010:	JDIcon F Ø5.0 L10
IC50115:	JDIcon F Ø5.0 L11.5
IC50130:	JDIcon F Ø5.0 L13

IC50150:	JDIcon F Ø5.0 L15
3.Dental implant JDIcon Ultra.S with cover screw:	
IC27080	JDIcon Ultra.S Ø 2.75 L 8
IC27100	JDIcon Ultra.S Ø 2.75 L 10
IC27115	JDIcon Ultra.S Ø 2.75 L 11.5
IC27130	JDIcon Ultra.S Ø 2.75 L 13
IC27150	JDIcon Ultra.S Ø 2.75 L 15
4.Dental implant JDNasal with cover screw:	
NA40200:	JDNasal Ø 4.0 L 20
NA40220:	JDNasal Ø 4.0 L 22
NA40240:	JDNasal Ø 4.0 L 24
NA40260:	JDNasal Ø 4.0 L 26
5.Dental implant JDPterygo with cover screw:	
PT40130:	JDPterygo Ø 4.0 L13
PT40150:	JDPterygo Ø 4.0 L15
PT40180:	JDPterygo Ø 4.0 L18
PT40200:	JDPterygo Ø 4.0 L20
6.Dental implant JDZygoma with cover screw:	
ZY43300:	JDZygoma Ø 4.3 L30
ZY43350:	JDZygoma Ø 4.3 L35
ZY43375:	JDZygoma Ø 4.3 L37.5
ZY43400:	JDZygoma Ø 4.3 L40
ZY43425:	JDZygoma Ø 4.3 L42.5
ZY43450:	JDZygoma Ø 4.3 L45
ZY43475:	JDZygoma Ø 4.3 L47.5
ZY43500:	JDZygoma Ø 4.3 L50
ZY43525:	JDZygoma Ø 4.3 L52.5
7.Dental implant JDIcon Plus F with cover screw:	
IC37080.	JDIcon Plus F Ø 3.7 L 8
IC37100.	JDIcon Plus F Ø 3.7 L 10
IC37115.	JDIcon Plus F Ø 3.7 L 11.5
IC37130.	JDIcon Plus F Ø 3.7 L 13
IC37150.	JDIcon Plus F Ø 3.7 L 15
IC37180.	JDIcon Plus F Ø 3.7 L 18
IC43060.	JDIcon Plus F Ø 4.3 L 6
IC43080.	JDIcon Plus F Ø 4.3 L 8
IC43100.	JDIcon Plus F Ø 4.3 L 10
IC43115.	JDIcon Plus F Ø 4.3 L 11.5
IC43130.	JDIcon Plus F Ø 4.3 L 13
IC43150.	JDIcon Plus F Ø 4.3 L 15
IC43180.	JDIcon Plus F Ø 4.3 L 18
IC50060.	JDIcon Plus F Ø 5.0 L 6
IC50080.	JDIcon Plus F Ø 5.0 L 8
IC50010.	JDIcon Plus F Ø 5.0 L 10
IC50115.	JDIcon Plus F Ø 5.0 L 11.5
IC50130.	JDIcon Plus F Ø 5.0 L 13

8.Dental implant JDIcon Plus with cover screw:	
IC37080,	JDIcon Plus Ø 3.7 L 8
IC37100,	JDIcon Plus Ø 3.7 L 10
IC37115,	JDIcon Plus Ø 3.7 L 11.5
IC37130,	JDIcon Plus Ø 3.7 L 13
IC37150,	JDIcon Plus Ø 3.7 L 15
IC37180,	JDIcon Plus Ø 3.7 L 18
IC43060,	JDIcon Plus Ø 4.3 L 6
IC43080,	JDIcon Plus Ø 4.3 L 8
IC43100,	JDIcon Plus Ø 4.3 L 10
IC43115,	JDIcon Plus Ø 4.3 L 11.5
IC43130,	JDIcon Plus Ø 4.3 L 13
IC43150,	JDIcon Plus Ø 4.3 L 15
IC43180,	JDIcon Plus Ø 4.3 L 18
IC50060,	JDIcon Plus Ø 5.0 L 6
IC50080,	JDIcon Plus Ø 5.0 L 8
IC50010,	JDIcon Plus Ø 5.0 L 10
IC50115,	JDIcon Plus Ø 5.0 L 11.5
IC50130,	JDIcon Plus Ø 5.0 L 13
9.Dental implant JDEvolution Plus with cover screw:	
EV37080:	JDEvolution Plus Ø 3.7 L 8
EV37100:	JDEvolution Plus Ø 3.7 L 10
EV37115:	JDEvolution Plus Ø 3.7 L 11.5
EV37130:	JDEvolution Plus Ø 3.7 L 13
EV37150:	JDEvolution Plus Ø 3.7 L 15
EV37180:	JDEvolution Plus Ø 3.7 L 18
EV43060:	JDEvolution Plus Ø 4.3 L 6
EV43080:	JDEvolution Plus Ø 4.3 L 8
EV43100:	JDEvolution Plus Ø 4.3 L 10
EV43115:	JDEvolution Plus Ø 4.3 L 11.5
EV43130:	JDEvolution Plus Ø 4.3 L 13
EV43150:	JDEvolution Plus Ø 4.3 L 15
EV43180:	JDEvolution Plus Ø 4.3 L 18
EV50060:	JDEvolution Plus Ø 5.0 L 6
EV50080:	JDEvolution Plus Ø 5.0 L 8
EV50100:	JDEvolution Plus Ø 5.0 L 10
EV50115:	JDEvolution Plus Ø 5.0 L 11.5
EV50130:	JDEvolution Plus Ø 5.0 L 13
EV50150:	JDEvolution Plus Ø 5.0 L 15
EV60060:	JDEvolution Plus Ø 6.0 L 6
EV60080:	JDEvolution Plus Ø 6.0 L 8
EV60100:	JDEvolution Plus Ø 6.0 L 10
EV60115:	JDEvolution Plus Ø 6.0 L 11.5
EV60130:	JDEvolution Plus Ø 6.0 L 13
EV60150:	JDEvolution Plus Ø 6.0 L 15
II. Abutment – 1/20/30/40/50 or 60 pieces/pack:	

variants of execution:	
1. Conical Abutment JDIcon:	
ICCA15C	Conical Abutment H 1.5 JDIcon
ICCA30C	Conical Abutment H 3.0 JDIcon
ICCA1725C	Conical Abutment angulated 17° H 2.5 JDIcon
ICCA1735C	Conical Abutment angulated 17° H 3.5 JDIcon
ICCA3025C	Conical Abutment angulated 30° H 2.5 JDIcon
ICCA3035C	Conical Abutment angulated 30° H 3.5 JDIcon
2. Conical Abutment JDIcon Plus:	
ICCA15C.	Conical Abutment H 1.5 JDIcon Plus
ICCA30C.	Conical Abutment H 3.0 JDIcon Plus
ICCA1725C.	Conical Abutment Angulated 17° H 2.5 JDIcon Plus
ICCA1735C.	Conical Abutment Angulated 17° H 3.5 JDIcon Plus
ICCA3025C.	Conical Abutment Angulated 30° H 2.5 JDIcon Plus
ICCA3035C.	Conical Abutment Angulated 30° H 3.5 JDIcon Plus
3. Conical Abutment JDEvolution Plus:	
EVNCA10C:	Conical Abutment Straight H 1.0 JDEvolution Plus
EVNCA15C:	Conical Abutment H 1.5 JDEvolution Plus
EVNCA20C:	Conical Abutment Straight H 2.0 JDEvolution Plus
EVNCA30C:	Conical Abutment H 3.0 JDEvolution Plus
EVNCA40C:	Conical Abutment Straight H 4.0 JDEvolution Plus
EVCA1725C:	Conical Abutment Angulated 17° H 2.5 JDEvolution Plus
EVCA1735C:	Conical Abutment Angulated 17° H 3.5 JDEvolution Plus
EVCA3025C:	Conical Abutment Angulated 30° H 2.5 JDEvolution Plus
EVCA3035C:	Conical Abutment Angulated 30° H 3.5 JDEvolution Plus
EVCA4545C:	Conical Abutment Angulated 45° H 4.5 JDEvolution Plus
EVCA6050C:	Conical Abutment Angulated 60° H 5.0 JDEvolution Plus
4. Conical Abutment Tissue JDEvolution Plus:	
EVNCA15TSC:	Conical Abutment Tissue Straight H 1.5 JDEvolution Plus
EVNCA30TSC:	Conical Abutment Tissue Straight H 3.0 JDEvolution Plus
EVNCA40TSC:	Conical Abutment Tissue Straight H 4.0 JDEvolution Plus
EVNCA50TSC:	Conical Abutment Tissue Straight H 5.0 JDEvolution Plus
5. Temporary Abutment JDIcon:	
ICTAEC	Temporary Abutment engaging JDIcon
ICTANEC	Temporary Abutment non engaging JDIcon
ICTANEWC	Temporary Abutment Non Engaging for Welding JDIcon
ISTAEC	Temporary abutment engaging JDIcon Ultra.S
6. Temporary Abutment Non Engaging Octa Abutment JDIcon Plus, ICOATANEC.	
7. Temporary Abutment JDEvolution Plus:	
EVTAE:	Temporary Abutment Engaging JDEvolution Plus
EVTANEC:	Temporary Abutment Non Engaging JDEvolution Plus
8. Temporary Abutment Tissue JDEvolution Plus:	
EVTAE:	Temporary Abutment Tissue Engaging JDEvolution Plus
EVTANETSC:	Temporary Abutment Tissue Non Engaging JDEvolution Plus
9. Straight Abutment JDIcon:	
ICSA4520C	Straight Abutment Ø 4.5 H 2.0 JDIcon

ICSA4540C	Straight Abutment Ø 4.5 H 4.0 JDIcon
ICSA5020C	Straight Abutment Ø 5.0 H 2.0 JDIcon
ICSA5040C	Straight Abutment Ø 5.0 H 4.0 JDIcon
ICSA6020C	Straight Abutment Ø 6.0 H 2.0 JDIcon
ICSA6040C	Straight Abutment Ø 6.0 H 4.0 JDIcon
10. Straight Abutment JDIcon Ultra.S:	
ISSA4020C	Straight Abutment Ø 4.0 H 2.0 JDIcon Ultra.S
ISSA4040C	Straight Abutment Ø 4.0 H 4.0 JDIcon Ultra.S
11. Straight Abutment JDIcon Plus:	
ICSA4520C.	Straight Abutment Ø 4.5 H 2.0 JDIcon Plus
ICSA4520NEC.	Straight Abutment Non Engaging Ø 4.5 H 2.0 JDIcon Plus
ICSA4540C.	Straight Abutment Ø 4.5 H 4.0 JDIcon Plus
ICSA4540NEC.	Straight Abutment Non Engaging Ø 4.5 H 4.0 JDIcon Plus
ICSA5020C.	Straight Abutment Ø 5.0 H 2.0 JDIcon Plus
ICSA5020NEC.	Straight Abutment Non Engaging Ø 5.0 H 2.0 JDIcon Plus
ICSA5040C.	Straight Abutment Ø 5.0 H 4.0 JDIcon Plus
ICSA5040NEC.	Straight Abutment Non Engaging Ø 5.0 H 4.0 JDIcon Plus
ICSA6020C.	Straight Abutment Ø 6.0 H 2.0 JDIcon Plus
ICSA6040C.	Straight Abutment Ø 6.0 H 4.0 JDIcon Plus
ICEXA5520C.	Straight Abutment Extra Ø 5.5 H 2.0 JDIcon Plus
ICEXA5540C.	Straight Abutment Extra Ø 5.5 H 4.0 JDIcon Plus
12. Straight Abutment JDEvolution Plus:	
EVNSA4520C:	Straight Abutment Ø 4.5 H 2.0 JDEvolution Plus
EVNSA4540C:	Straight Abutment Ø 4.5 H 4.0 JDEvolution Plus
EVNSA5020C:	Straight Abutment Ø 5.0 H 2.0 JDEvolution Plus
EVNSA5040C:	Straight Abutment Ø 5.0 H 4.0 JDEvolution Plus
EVNSA6020C:	Straight Abutment Ø 6.0 H 2.0 JDEvolution Plus
EVNSA6040C:	Straight Abutment Ø 6.0 H 4.0 JDEvolution Plus
13. Straight Abutment Tissue JDEvolution Plus:	
EVNSA5020TSC:	Straight Abutment Tissue Ø 5.0 H 2.0 JDEvolution Plus
EVNSA5040TSC:	Straight Abutment Tissue Ø 5.0 H 4.0 JDEvolution Plus
14. Anatomic Abutment JDIcon:	
ICEA15C	Anatomic Abutment H 1.5 JDIcon
ICEA30C	Anatomic Abutment H 3.0 JDIcon
IC15A15C	Anatomic Abutment Angulated 15° H 1.5 JDIcon
IC15A30C	Anatomic Abutment Angulated 15° H 3.0 JDIcon
IC25A15C	Anatomic Abutment Angulated 25° H 1.5 JDIcon
IC25A30C	Anatomic Abutment Angulated 25° H 3.0 JDIcon
15. Anatomic Abutment JDIcon Plus:	
IC15A15C.	Anatomic Abutment Angulated 15° H 1.5 JDIcon Plus
IC15A30C.	Anatomic Abutment Angulated 15° H 3.0 JDIcon Plus
IC25A15C.	Anatomic Abutment Angulated 25° H 1.5 JDIcon Plus
IC25A30C.	Anatomic Abutment Angulated 25° H 3.0 JDIcon Plus
16. Anatomic Abutment JDEvolution Plus:	
EVEA15:	Anatomic Abutment H 1.5 JDEvolution Plus
EVEA30:	Anatomic Abutment H 3.0 JDEvolution Plus

EV15A15:	Anatomic Abutment Angulated 15° H 1.5 JDEvolution Plus
EV15A15N:	15° Angulated Anatomic Abutment Ø 4.5 H 1.5 JDEvolution Plus
EV15A30:	Anatomic Abutment Angulated 15° H 3.0 JDEvolution Plus
EV15A30N:	15° Angulated Anatomic Abutment Ø 4.5 H 3.0 JDEvolution Plus
EV25A15:	Anatomic Abutment Angulated 25° H 1.5 JDEvolution Plus
EV25A30:	Anatomic Abutment Angulated 25° H 3.0 JDEvolution Plus
17. Ball Abutment JDIcon:	
ICBA15	Ball Abutment H 1.5 JDIcon
ICBA30	Ball Abutment H 3.0 JDIcon
ICBA50	Ball Abutment H 5.0 JDIcon
18. Ball Abutment JDIcon Ultra.S:	
ISBA15	Ball Abutment H 1.5 JDIcon Ultra.S
ISBA30	Ball Abutment H 3.0 JDIcon Ultra.S
ISBA50	Ball Abutment H 5.0 JDIcon Ultra.S
19. Ball Abutment JDIcon Plus:	
ICBA15.	Ball Abutment H 1.5 JDIcon Plus
ICBA30.	Ball Abutment H 3.0 JDIcon Plus
ICBA50.	Ball Abutment H 5.0 JDIcon Plus
20. Ball Abutment JDEvolution Plus:	
EVBA15:	Ball Abutment H 1.5 JDEvolution Plus
EVBA30:	Ball Abutment H 3.0 JDEvolution Plus
EVBA50:	Ball Abutment H 5.0 JDEvolution Plus
21. Emi Abutment JDIcon:	
ICEMI15	Emi Abutment H 1.5 JDIcon
ICEMI30	Emi Abutment H 3.0 JDIcon
ICEMI50	Emi Abutment H 5.0 JDIcon
22. Emi Abutment JDIcon Plus:	
ICEMI15.	Emi Abutment H 1.5 JDIcon Plus
ICEMI30.	Emi Abutment H 3.0 JDIcon Plus
ICEMI50.	Emi Abutment H 5.0 JDIcon Plus
23. Emi Abutment JDEvolution Plus:	
EVEMI15:	Emi Abutment H 1.5 JDEvolution Plus
EVEMI30:	Emi Abutment H 3.0 JDEvolution Plus
EVEMI50:	Emi Abutment H 5.0 JDEvolution Plus
24. GP Abutment JDIcon:	
ICGP40C	GP Abutment Ø 4.0 JDIcon
ICGP50C	GP Abutment Ø 5.0 JDIcon
ICGP60C	GP Abutment Ø 6.0 JDIcon
25. GP Abutment JDIcon Ultra.S:	
ISGP32C	GP Abutment Ø 3.2 JDIcon Ultra.S
ISGP40C	GP Abutment Ø 4.0 JDIcon Ultra.S
IS15GPA40C	GP Abutment 15° Ø 4.0 JDIcon Ultra.S
26. GP Abutment JDIcon Ultra.S:	
ICGP40C.	GP Abutment Ø 4.0 JDIcon Plus
ICGP50C.	GP Abutment Ø 5.0 JDIcon Plus
ICGP60C.	GP Abutment Ø 6.0 JDIcon Plus

27. GP Abutment JDEvolution Plus:	
EVGPA40EC:	GP Abutment Engaging Ø 4.0 JDEvolution Plus
EVGPA40NEC:	GP Abutment Non Engaging Ø 4.0 JDEvolution Plus
EVGPAEC:	GP Abutment Engaging Ø 5.0 JDEvolution Plus
EVGPA50NEC:	GP Abutment Non Engaging Ø 5.0 JDEvolution Plus
EVGPA60EC:	GP Abutment Engaging Ø 6.0 JDEvolution Plus
28. GP Abutment for Conical Abutment JDEvolution:	
EVCAGPAEC	GP Abutment Engaging for Conical Abutment JDEvolution
EVCAGPANEC	GP Abutment Non Engaging for Conical Abutment JDEvolution
EVCAGPAEC:	GP Abutment Engaging for Conical Abutment JDEvolution Plus
EVCAGPANEC:	GP Abutment Non Engaging for Conical Abutment JDEvolution Plus
29. Octa Abutment JDIcon Plus:	
ICOA15.	Octa Abutment H 1.5 JDIcon Plus
ICOA30.	Octa Abutment H 3.0 JDIcon Plus
ICOA40.	Octa Abutment H 4.0 JDIcon Plus
30. Rapid Abutment JDEvolution Plus:	
EVRA15C:	Rapid Abutment with Healing Cap and Coping H 1.5 JDEvolution Plus
EVRA30C:	Rapid Abutment with Healing Cap and Coping H 3.0 JDEvolution Plus
EVRA15D:	Rapid Abutment w/o Healing Cap and Coping H 1.5 JDEvolution Plus
EVRA30D:	Rapid Abutment w/o Healing Cap and Coping H 3.0 JDEvolution Plus
III. Prosthetic components - 1/20/30/40/50 or 60 pieces/pack:	
1. Healing Abutment in variation:	
1.1. Healing Abutment JDIcon:	
ICHA43	Healing Abutment Ø 4.0 H 3.0 JDIcon
ICHA45	Healing Abutment Ø 4.0 H 5.0 JDIcon
ICHA47	Healing Abutment Ø 4.0 H 7.0 JDIcon
ICHA53	Healing Abutment Ø 5.0 H 3.0 JDIcon
ICHA55	Healing Abutment Ø 5.0 H 5.0 JDIcon
ICHA57	Healing Abutment Ø 5.0 H 7.0 JDIcon
ICHA59	Healing Abutment Ø 5.0 H 9.0 JDIcon
ICHA63	Healing Abutment Ø 6.0 H 3.0 JDIcon
ICHA65	Healing Abutment Ø 6.0 H 5.0 JDIcon
ICHA67	Healing Abutment Ø 6.0 H 7.0 JDIcon
1.2. Healing Abutment JDIcon Ultra.S:	
ISHA323	Healing Abutment Ø 3.2 H 3.0 JDIcon Ultra.S
ISHA325	Healing Abutment Ø 3.2 H 5.0 JDIcon Ultra.S
ISHA327	Healing Abutment Ø 3.2 H 7.0 JDIcon Ultra.S
ISHA403	Healing Abutment Ø 4.0 H 3.0 JDIcon Ultra.S
ISHA405	Healing Abutment Ø 4.0 H 5.0 JDIcon Ultra.S
ISHA407	Healing Abutment Ø 4.0 H 7.0 JDIcon Ultra.S
1.3. Healing Abutment JDIcon Plus:	
ICHA43.	Healing Abutment Ø 4.0 H 3.0 JDIcon Plus
ICHA45.	Healing Abutment Ø 4.0 H 5.0 JDIcon Plus
ICHA47.	Healing Abutment Ø 4.0 H 7.0 JDIcon Plus
ICHA53.	Healing Abutment Ø 5.0 H 3.0 JDIcon Plus
ICHA55.	Healing Abutment Ø 5.0 H 5.0 JDIcon Plus

ICHA57.	Healing Abutment Ø 5.0 H 7.0 JDIcon Plus
ICHA63.	Healing Abutment Ø 6.0 H 3.0 JDIcon Plus
ICHA65.	Healing Abutment Ø 6.0 H 5.0 JDIcon Plus
ICHA67.	Healing Abutment Ø 6.0 H 7.0 JDIcon Plus
ICHA753.	Healing Abutment Ø 7.5 H 3.0 JDIcon Plus
ICHA755.	Healing Abutment Ø 7.5 H 5.0 JDIcon Plus
1.4. Healing Abutment JDEvolution Plus:	
EVHA43:	Healing Abutment Ø 4.0 H 3.0 JDEvolution Plus
EVHA45:	Healing Abutment Ø 4.0 H 5.0 JDEvolution Plus
EVHA47:	Healing Abutment Ø 4.0 H 7.0 JDEvolution Plus
EVHA53:	Healing Abutment Ø 5.0 H 3.0 JDEvolution Plus
EVHA55:	Healing Abutment Ø 5.0 H 5.0 JDEvolution Plus
EVHA57:	Healing Abutment Ø 5.0 H 7.0 JDEvolution Plus
EVHA59:	Healing Abutment Ø 5.0 H 9.0 JDEvolution Plus
EVHA63:	Healing Abutment Ø 6.0 H 3.0 JDEvolution Plus
EVHA65:	Healing Abutment Ø 6.0 H 5.0 JDEvolution Plus
EVHA67:	Healing Abutment Ø 6.0 H 7.0 JDEvolution Plus
EVHA753:	Healing Abutment Ø 7.5 H 3.0 JDEvolution Plus
EVHA755:	Healing Abutment Ø 7.5 H 5.0 JDEvolution Plus
1.5. Healing Abutment Tissue JDEvolution Plus:	
EVHA54TS:	Healing Abutment Tissue Ø 5.0 H 4.0 JDEvolution Plus
EVHA56TS:	Healing Abutment Tissue Ø 5.0 H 6.0 JDEvolution Plus
1.6. Healing Abutment Bridge JDIcon:	
ICHA53B	Healing Abutment Bridge Ø 5.0 H 3.0 JDIcon
ICHA55B	Healing Abutment Bridge Ø 5.0 H 5.0 JDIcon
ICHA57B	Healing Abutment Bridge Ø 5.0 H 7.0 JDIcon
2. Impression Coping in variation:	
2.1. Conical Abutment Impression Coping Open Tray Engaging JDEvolution, EVCAICOTEC	
2.2. Conical Abutment Impression Coping Open Tray JDEvolution, EVCAICOTC	
2.3. Conical Abutment Impression Coping Open Tray Long JDEvolution, EVCAICOTLC	
2.4. Conical Abutment Impression Coping Closed Tray, EVCAICCTC	
2.5. Emi Abutment Plastic Impression Coping, EVEMIIC	
2.6. Emi Abutment Steel Impression Coping, EVEMIICS	
2.7. Impression Coping Open Tray JDIcon:	
ICICOT4C	Impression Coping Open Tray Ø 4.0 JDIcon
ICICOT5C	Impression Coping Open Tray Ø 5.0 JDIcon
ICICOT6C	Impression Coping Open Tray Ø 6.0 JDIcon
ICICOTNEC	Impression Coping Open Tray for Bridge JDIcon
2.8. Impression Coping Closed Tray JDIcon:	
ICICCT4C	Impression Coping Closed Tray Ø 4.0 JDIcon
ICICCT5C	Impression Coping Closed Tray Ø 5.0 JDIcon
ICICCT6C	Impression Coping Closed Tray Ø 6.0 JDIcon
2.9. Impression Coping Open Tray JDIcon Ultra.S:	
ISICOT32C	Impression Coping Open Tray Ø 3.2 JDIcon Ultra.S
ISICOT40C	Impression Coping Open Tray Ø 4.0 JDIcon Ultra.S
2.10. Impression Coping Closed Tray JDIcon Ultra.S:	

ISICCT32C	Impression Coping Closed Tray Ø 3.2 JDIcon Ultra.S
ISICCT40C	Impression Coping Closed Tray Ø 4.0 JDIcon Ultra.S
2.11. Impression Coping Open Tray JDIcon Plus:	
ICICOT4C.	Impression Coping Open Tray Ø 4.0 JDIcon Plus
ICICOT5C.	Impression Coping Open Tray Ø 5.0 JDIcon Plus
ICICOT6C.	Impression Coping Open Tray Ø 6.0 JDIcon Plus
2.12. Impression Coping Closed Tray JDIcon Plus:	
ICICCT4C.	Impression Coping Closed Tray Ø 4.0 JDIcon Plus
ICICCT5C.	Impression Coping Closed Tray Ø 5.0 JDIcon Plus
ICICCT6C.	Impression Coping Closed Tray Ø 6.0 JDIcon Plus
2.13. Impression Coping Closed Tray Direct Press Fit JDIcon Plus, ICICCT1C.	
2.14. Impression Coping Open Tray for Octa Abutment JDIcon Plus, ICOAICOTC.	
2.15. Impression Coping Open Tray JDEvolution Plus:	
EVICOT4C:	Impression Coping Open Tray Ø 4.0 JDEvolution Plus
EVICOT5C:	Impression Coping Open Tray Ø 5.0 JDEvolution Plus
EVICOT6C:	Impression Coping Open Tray Ø 6.0 JDEvolution Plus
EVICOTNEC:	Impression Coping Open Tray Non Engaging JDEvolution Plus
2.16. Impression Coping Closed Tray JDEvolution Plus:	
EVICCT4C:	Impression Coping Closed Tray Ø 4.0 JDEvolution Plus
EVICCT5C:	Impression Coping Closed Tray Ø 5.0 JDEvolution Plus
EVICCT6C:	Impression Coping Closed Tray Ø 6.0 JDEvolution Plus
2.17. Impression Coping Closed Tray Direct Press Fit JDEvolution Plus, EVICCT1C:	
2.18. Conical Abutment Impression Coping Engaging Open Tray JDEvolution Plus, EVCAICOTEC:	
2.19. Impression Coping Open Tray for Conical Abutment JDEvolution Plus, EVCAICOTC:	
2.20. Conical Abutment Impression Coping Open Tray Long JDEvolution Plus, EVCAICOTLC:	
2.21. Impression Coping Tissue Open Tray Ø 5.0 JDEvolution Plus, EVICOT5TSC:	
3. Interface in variation:	
3.1. Interface CAD CAM for Conical Abutment JDEvolution:	
EVCAITEC	Interface CAD CAM for Conical Abutment Engaging JDEvolution
EVCAITC	Interface CAD CAM for Conical Abutment Non Engaging JDEvolution
EVCATIBC	Interface CAD CAM Non Engaging for Conical H 5.0 Abutment JDEvolution
3.2. Interface CAD CAM Octa Abutment JDIcon Plus, ICOAITC.	
3.2. Interface CAD CAM for Conical Abutment JDEvolution Plus:	
EVCAITEC:	Interface CAD CAM Engaging for Conical Abutment JDEvolution Plus
EVCAITC:	Interface CAD CAM Non Engaging for Conical Abutment JDEvolution Plus
EVCATIBC:	Interface CAD CAM Non Engaging for Conical H 5.0 Abutment JDEvolution Plus
4. TiBase in variation:	
4.1. TiBase JDIcon:	
ICTIBC	TiBase Engaging JDIcon
ICTIBNEC	TiBase Non Engaging JDIcon
ICTIB15C	TiBase Engaging H 1.5 JDIcon
ICTIB15NEC	TiBase Non Engaging H 1.5 JDIcon
ICTIB30C	TiBase Engaging H 3.0 JDIcon
ICTIB30NEC	TiBase Non Engaging H 3.0 JDIcon
4.2. TiBase JDIcon Plus:	
ICTIBC.	TiBase Engaging JDIcon Plus

ICTIBNEC.	TiBase Non Engaging JDIcon Plus
ICTIB15C.	TiBase Engaging H 1.5 JDIcon Plus
ICTIB15NEC.	TiBase Non Engaging H 1.5 JDIcon Plus
ICTIB30C.	TiBase Engaging H 3.0 JDIcon Plus
ICTIB30NEC.	TiBase Non Engaging H 3.0 JDIcon Plus
ICTIBNC.	TiBase New Engaging JDIcon Plus
ICTIBNENC.	TiBase New Non Engaging JDIcon Plus
ICTIB15NC.	TiBase New Engaging H 1.5 JDIcon Plus
ICTIB15NENC.	TiBase New Non Engaging H 1.5 JDIcon Plus
ICTIB30NC.	TiBase New Engaging H 3.0 JDIcon Plus
ICTIB30NENC.	TiBase New Non Engaging H 3.0 JDIcon Plus
4.3. TiBase Extra JDIcon Plus:	
ICEXTIBC.	TiBase Extra Engaging JDIcon Plus
ICEXTIBNEC.	TiBase Extra Non Engaging JDIcon Plus
ICEXTIB15C.	TiBase Extra Engaging H 1.5 JDIcon Plus
ICEXTIB15NEC.	TiBase Extra Non Engaging H 1.5 JDIcon Plus
ICEXTIB30C.	TiBase Extra Engaging H 3.0 JDIcon Plus
ICEXTIB30NEC.	TiBase Extra Non Engaging H 3.0 JDIcon Plus
4.4. TiBase Octa Abutment JDIcon Plus, ICOATIBC.	
4.5. TiBase JDIcon Ultra.S, ISTIBC	
4.6. TiBase JDEvolution Plus:	
EVTIBC:	TiBase Engaging JDEvolution Plus
EVTIBNEC:	TiBase Non Engaging JDEvolution Plus
EVTIB15C:	TiBase Engaging H 1.5 JDEvolution Plus
EVTIB15NEC:	TiBase Non Engaging H 1.5 JDEvolution Plus
EVTIB30C:	TiBase Engaging H 3.0 JDEvolution Plus
EVTIB30NEC:	TiBase Non Engaging H 3.0 JDEvolution Plus
EVTIBNC:	TiBase New Engaging JDEvolution Plus
EVTIBNENC:	TiBase New Non Engaging JDEvolution Plus
EVTIB15NC:	TiBase New Engaging H 1.5 JDEvolution Plus
EVTIB15NENC:	TiBase New Non Engaging H 1.5 JDEvolution Plus
EVTIB30NC:	TiBase New Engaging H 3.0 JDEvolution Plus
EVTIB30NENC:	TiBase New Non Engaging H 3.0 JDEvolution Plus
4.7. TiBase Tissue JDEvolution Plus:	
EVTIB15TSC:	TiBase Tissue Engaging H 1.5 JDEvolution Plus
EVTIB15NETSC:	TiBase Tissue Non Engaging H 1.5 JDEvolution Plus
EVTIB30TSC:	TiBase Tissue Engaging H 3.0 JDEvolution Plus
EVTIB30NETSC:	TiBase Tissue Non Engaging H 3.0 JDEvolution Plus
5. Cover Screw in variation:	
5.1. Cover Screw JDIcon, ICCS	
5.2. Cover Screw JDIcon Ultra.S, ISCS	
5.3. Cover Screw JDIcon Plus, ICCS.	
5.4. Cover Screw JDEvolution Plus, EVCS:	
5.5. Cover Screw Ø 6.0 JDEvolution Plus, EVCS6:	
6. Prosthetic Screw in variation:	
6.1. Prosthetic Screw JDIcon, ICS	

6.2. Prosthetic Screw Angulated JDIcon, ICSA
6.3. Conical Abutment Angulated Screw JDIcon, ICCASA
6.4. Prosthetic Screw JDIcon Ultra.S, ISS
6.5. Prosthetic Screw Angulated JDIcon Ultra.S, ISSA
6.6. Prosthetic Screw JDIcon Plus, ICS.
6.7. Prosthetic Screw Angulated JDIcon Plus, ICSA.
6.8. Conical Abutment Angulated Screw JDIcon Plus, ICCASA.
6.9. Prosthetic Screw Octa Abutment JDIcon Plus, ICOAPS.
6.10. Prosthetic Screw Angulated Octa Abutment JDIcon Plus, ICOAPSA.
6.11. Prosthetic Screw JDEvolution Plus, EVS:
6.12. Prosthetic Screw Angulated JDEvolution Plus, EVSA:
6.13. Prosthetic Screw Conical Abutment JDEvolution Plus, EVCAPS:
6.14. Prosthetic Screw Conical Abutment Long JDEvolution Plus, EVCAPSL:
6.15. Screw for Angulated Conical Abutment JDEvolution Plus, EVCASA:
6.16. Screw for 60° Angulated Conical Abutment JDEvolution Plus, EVCASA60:
6.17. Prosthetic Screw Conical Abutment JDEvolution, EVCAPS
6.18. Screw for Angulated Conical Abutment JDEvolution, EVCASA
6.19. Prosthetic Screw Angulated for Conical Abutment JDEvolution, EVCAPSA
7. ScanBody in variation:
7.1. ScanBody Engaging JDIcon, ICSBCEC
7.2. ScanBody Engaging JDIcon Ultra.S, ISSBCEC
7.3. ScanBody Conical Abutment JDEvolution Plus, EVCASBCEC:
7.4. ScanBody Engaging JDIcon Plus, ICSBCEC.
7.5. ScanBody Octa Abutment JDIcon Plus, ICOASBCEC.
7.6. ScanBody Engaging JDEvolution Plus, EVSBCEC:
7.7. ScanBody Conical Abutment JDEvolution, EVCASBCEC
8. Healing Cap in variation:
8.1. Healing Cap Octa Abutment JDIcon Plus, ICOAHC.
8.2. Healing Cap Octa Abutment D 5.0 H 4.0 JDIcon Plus, ICOAHC54.
8.3. Conical Abutment Healing Cap JDEvolution, EVCAHC
8.4. Conical Abutment Healing Cap H 6.0 JDEvolution, EVCAHCL
8.5. Conical Abutment Healing Cap Peek JDEvolution, EVCAHCB
8.6. Healing Cap for Conical Abutment JDEvolution Plus, EVCAHC:
8.7. Conical Abutment Healing Cap H 6.0 JDEvolution Plus, EVCAHCL:
8.8. Conical Abutment Healing Cap Peek JDEvolution Plus, EVCAHCB:
9. Temporary Abutment Conical Abutment in variation:
9.1. Temporary Abutment Non Engaging Conical Abutment JDEvolution Plus, EVCATANEC:
9.2. Temporary Abutment Non Engaging Conical Abutment for Welding JDEvolution Plus, EVCATANEWC:
9.3. Temporary Abutment Non Engaging Conical Abutment Smooth for Welding JDEvolution Plus, EVCATANEWSC:
9.4. Temporary Abutment Non Engaging Conical Abutment JDEvolution, EVCATANEC
9.5. Temporary Abutment Non Engaging Conical Abutment for Welding JDEvolution, EVCATANEWC
10. Abutment Retrieval Tool in variation:
10.1. Abutment Retrieval Tool JDIcon, ICATR
11. ScanPost JDEvolution Plus, EVSCPC:
IV. Instructions for use

2. Description of medical device.



The implantation is a surgical procedure which includes opening a flap or punching through the soft tissue, drilling and inserting the implant into the jawbone.

The goal of J Dental Care implants is to replace missing teeth by providing a stable base for functional and esthetic dental restorations.

J Dental Care implants include different types and sizes of dental implants made of Titanium alloy Ti Gr.4 - ASTM F67 and Ti Gr.5 - ASTM F136 and undergo a special surface treatment.

The implants are provided sterile by gamma irradiation.

The J Dental Care implants line includes: JDIcon, JDIcon F, JDIcon Ultra.S, JDNasal, JDZygoma, JDIcon F Plus, JDIcon Plus, JDEvolution Plus, JDPterygo also the set of

abutments and fixing screws necessary to build the prosthesis.

Prosthetic components of the J Dental Care System, such as abutments, healing abutments, transfers, interfaces, titanium bases, scan markers, healing caps and retaining screws, provide support and retention for screw-retained or cement-retained restorations in the mandible and maxilla.

3. Destination.

The product is intended for surgical implantation in the alveolar and / or basal bone of the lower jaw or upper jaw to install and fix the denture retainer

4. Application area.

Dentistry, maxillofacial surgery.

5. Indications.

J Dental Care implants are intended for surgical placement in the upper or lower jaw.

J Dental Care implant system is comprised of dental implant fixtures and prosthetic devices. J Dental Care implant system (**JDIcon, JDIcon F, JDIcon F Plus, JDIcon Plus, JDEvolution Plus, JDPterygo**) provides a means for prosthetic attachment in single tooth restorations and partially or fully edentulous spans with multiple single teeth utilizing delayed or immediate loading, or as a terminal or intermediary abutment for fixed or removable bridgework or to retain overdentures. Prosthetic devices provide support and retention for screw-retained or cemented restorations in mandible and maxilla. J Dental Care implant system is intended for immediate function on single tooth and/or multiple tooth applications when good primary stability is achieved, with appropriate occlusal loading, in order to restore chewing function.

JDIcon Ultra.S dental implants provide a means for prosthetic attachment in single tooth restorations or as a terminal or intermediary abutment for fixed or removable bridgework or to retain overdentures. JDIcon Ultra.S is ideal for areas with limited spaces, such as missing lateral incisors. It is intended for use for single-tooth restoration and in implant fixed partial dentures (implant bridges) in incisors and canine area. In the premolar area, it is intended for use in implant fixed partial dentures (implant bridges) in patients with no parafunctional habits.

Dental implant JDNasal is a J Dental Care implant system. JDNasal implants are endosseous dental implants intended for surgical placement in the upper jaw. JDNasal implants are comprised of dental implant fixtures and prosthetic devices.

JDNasal implants provide a means for prosthetic attachment in single tooth restorations and partially or fully edentulous spans with multiple single teeth utilizing delayed or immediate loading when good primary stability is achieved, in order to restore patient chewing function.

JDZygoma implants are endosseous dental implants intended for surgical placement jaw in the zygomatic bone. JDZygoma implants provide a means for prosthetic attachment in partially or fully edentulous spans utilized delayed or immediate loading when good primary stability is achieved in order to restore patient chewing function in the severe atrophy of the maxilla.

6. Instruction for use.

IMPLANTS JDIcon, JDIcon F, JDIcon Ultra.S, JDIcon F Plus, JDIcon Plus, JDEvolution Plus, JDPterygo

EXAMINATION AND TREATMENT PLANNING

Before beginning the treatment a detailed examination will be necessary of the general health conditions of the patient as well as a careful evaluation of his/her motivation and expectations. It is also necessary to consider key factors such as oral hygiene, occlusion type and habits such as smoking.

Must rule out the present of soft tissue pathologies and must consider whether the patient's bone condition is ideal for the insertion of the implant.



Quality of the bone

Generally, dense bone gives the implant a good primary stability, while soft bone requires “under-preparation” of the implant bed to be able to guarantee an adequate primary stability.

Vertical bone quantity

The quantity of available bone for the insertion of the implant varies in function of the anatomy.

The system design allows the affixing and stabilization of the implant in only three millimetres of bone. The available bone may be situated in the most apical section of the implant, as it happens in a post-extraction sites, or at the neck section of the implant, as in cases of maxillary sinus elavation procedure.

Horizontal bone thickness

After placement of the implant the thickness of the residual bone needs to be at least one millimeter, in both lingual-palatal and vestibular direction. The special reduction in the coronal section of the implant makes it ideal for cases with thin alveolar ridges. You can use the flapless technique when there is an optimal quantity of bone and soft tissue.

Use flap technique when it is necessary to examine the alveolar bone and the adjacent anatomical structures, and when executing ridge augmentation procedures.

Important: an objective examination and a radiological study are essential elements to determine anatomical conformation, occlusion, periodontal status and bone thickness. A “Cone Beam CT” radiological study is recommended to obtain a more precise evaluation of the dimension and quality of the available bone.

IMPLANT DIAMETERS AND LENGHTS

To ease treatment planning and the clinical procedures, JD implants are available in various easily identifiable diameters and lenghts using colour coding.

The products are distinguished by their unique prosthetic connection, in which the abutment platform is the same for all implant diameters.

Available lengths for each diameter are indicated in the product catalogues.

DRILLING SEQUENCE

The drills provided with the surgical kit must be used with external irrigation to prevent excessive heating of the bone tissue. Drilling must be interrupted if it is not possible to verify irrigation.

Drill with an in and out pumping motion without excessive force. When doing this movement, you will have to take out the drill completely to check that irrigation is taking place correctly.


Drills are characterised by their inclined wedges allowing the homogeneous distribution of the cooling physiological solution, as well as the conservation of cortical bone shavings resulting from the drilling process after the preparation.

If the sharpness of the drill diminishes, the latter must be pulled out of the handle for cleaning. Proceed until you are able to take the drill to the desired depth.

Should there be adjacent natural teeth interfering with the head of the contra-angle, the drill extension must be used. It is advisable to use surgical motors with adjustable speed and torque.

Important: The initial drill head is of the precision type.

Drill heads must be substituted approximately every 20 osteotomies, or when their cutting efficiency diminishes.

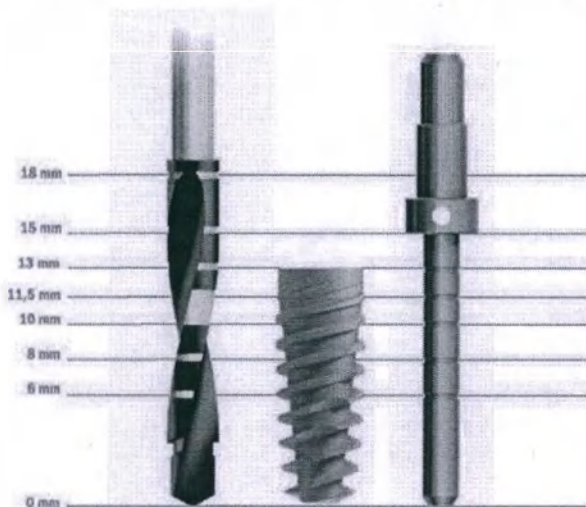


Drilling sequence

It is recommended to adhere to the indications of the following drilling sequence to ensure optimal primary stability of the implant. Please see the relevant information in the catalogues.

Drill Stop procedure

For a safe and accurate drilling procedure, mount the Drill Stop on the twist drill.

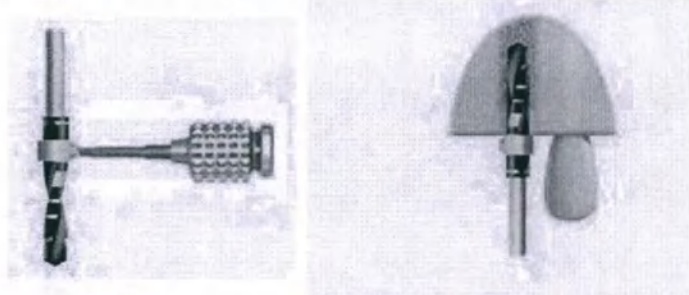


Possibility of “osseus infra-preparation” (infra-drilling) to obtain greater primary stability in soft bone.

In soft bone, the self-threading capacity of the implants also make it possible to insert them with a high degree of infra-preparation given that bone condensing in the apical region considerably increases the primary stability of the implant. If it is desired to use this characteristic of the implant it is necessary to drill the bone up to 2 to 4 mm less than the total length of the implant.

Insert the implant in the drilled cavity. Once the drilling depth is reached the implant will have osteotomous effect, considering the bone and increasing primary stability until reaching optimal stability at the desired depth.

It is advisable to use the infra-drilling in suboptimal bone quality.

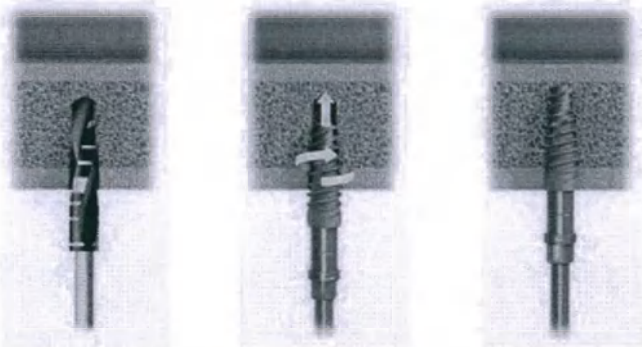

CLINICAL PROCEDURE STEP BY STEP

The illustrations show the drilling sequence for a JDIcon® 4.3 x 13 mm implant in medium bone. The drilling protocol for all diameters and bone qualities must be consulted in the catalogues.

If the technique of surgery with flap is used for a better visualisation of the bone anatomy, it will be necessary, as a preliminary operation, to make an incision along all the thickness of the soft tissue, and lift the gum edge to access the bone crest.

If the flapless technique is used (minimally invasive) it is necessary to remove gum tissue with a circular scalpel.




Initial precision drilling

Drill a hole on the crest with the Ø 1.5 mm precision drill. The initial precision drill features an aggressive cutting angle that is efficient even in dense bone.

Make sure that you do not drill with the precision drill to a depth greater than that of the selected implant.

The maximum drilling speed with the precision drill must be 800 rpm.

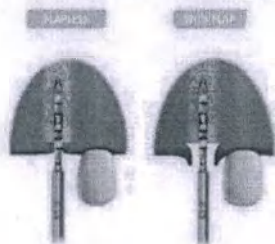

Note: When operating flapless, always measure the thickness of the soft tissue with a probe, for a correct preparation of the osteotomy to the desired depth.

Only if use flapless surgery:

Tissue punch

Insert the direction guide for the tissue punch corresponding to the diameter of the selected implant in the Ø 1.5 hole. Connect the tissue punch to the contra-angle and position it on the guide. Incise into tissue until reaching the osseous crest.


The speed must not exceed 800 rpm.



With the use of a normal or small surgical blade incise perpendicularly along the outline of the soft tissue so as to free it and remove it from the top of the crest.




To continue preparing the osteotomy use the Ø 2.0 drill. Maximum speed must be 800 rpm.

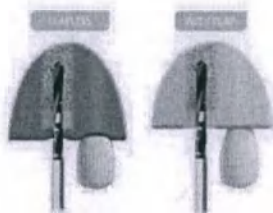

Direction indicator


You can control the direction of the drilling at all times using the direction indicator. You may need a radiological examination to verify parallelism with other pieces or adjacent implants. If necessary, correct the direction of the drilling.

When placing multiple implants, proceed with the same drill for all the osteotomies before moving to the next drill in the sequence.

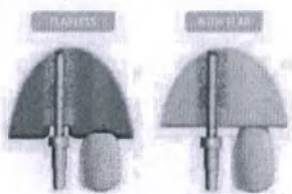


Diameter 2.4 / 2.8 drilling

To continue with the preparation use the Ø 2.4/2.8 drill head. Maximum drilling speed is to be 800 rpm.

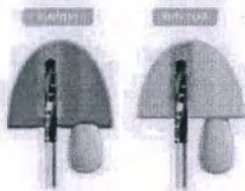

Diameter 3.2 / 3.6 drilling

To continue with the preparation use the Ø 3.2/3.6 drill head. Maximum drilling speed is to be 800 rpm.

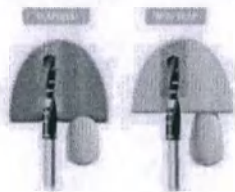

Control the depth of the drilling and integrity of the cortical walls in the prepared cavity using a probe.



Insertion of the implant

The printed label on the exterior of the package contains information on the dimensions of the implant: the diameter, associated with a colour code and the length.

Open the package in a sterile environment and remove the plastic protection to access the implant.

The final placement of the JD implant, depending on the clinical situation, can be carried out with one of the following methods:

1. The dynamometric key



2. The surgical engine



3. The surgical driver



Important: An excessive torque on the implant may compromise the integrity of the internal connection and put excessive pressure on the surrounding bone, negatively affecting bone integration. The implant insertion torque cannot exceed 80 Ncm.

Use of the dynamometric key


Connect the implant driver to the dynamometric key with the mounted surgical adapter.



To connect the implant put light pressure on the driver.



Insert the implant in the previously made osteotomy

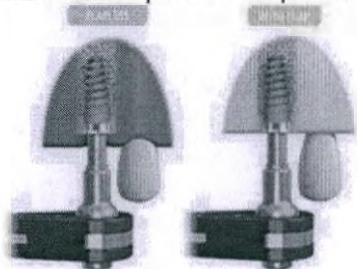

Use of the surgical engine


Connect the implant driver to the hand piece.



To connect the implant, apply light pressure on the driver.



Slowly insert the implant in the previously made osteotomy.
(25 rotations/minute)

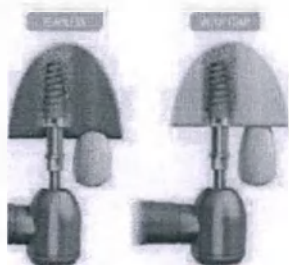

User of the surgical driver


It is also possible to use the surgical driver to position the implants. Connect the implant driver to the surgical driver.



To connect the implant, apply light pressure on the driver.



Insert the implant in the osteotomy previously carried out.

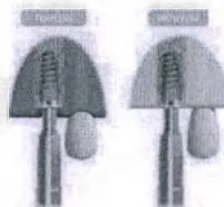

Final positioning

Connect the dynamometric key with the surgical adapter mounted on the driver of the implant and seat the implant to its final depth.

To carry out immediate load protocols, the implant should be inserted with a final seating torque of 35-45 Ncm but without exceeding in any case 80 Ncm. You can withdraw the driver by extracting it with vertical movement.



For an optimal esthetic result position the implant on the bone crest or up to 0.5 to 1 mm below.




Important: Avoid excessive force when inserting the implant with the dynamometric key given that inadequate pressure on the bone could cause necrosis and compromise integration with the bone. If you observe excessive torque (of approximately 80 Ncm) at any stage of the insertion, rotate the implant in the counter-clockwise direction two or three turns in order to take advantage of its self-threading capacity and continue with the insertion. However, if you still encounter too much resistance, pull out the implant and carry out a more extensive osteotomy.

Orientation of the implant

At the time of the final placement of the implant, when the desired depth has been reached, it is necessary to align the reference points in the driver with the vestibular wall. In this way the hexagonal shape of the internal connection makes it possible to position and orient the prosthetic abutment in an optimal manner.



The implant driver has a 3 mm mark to facilitate the vertical positioning of the implant platform in accordance to soft tissue thickness (applicable in flapless surgery).

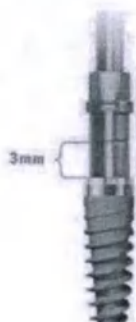

JDZYGOMA

PRE-OPERATIVE EXAMINATION OF THE PATIENT.

A thorough pre-treatment evaluation of edentulous patients or patients with failing/terminal dentitions is necessary to establish a predictable treatment outcome.

To begin the evaluation of this group of patients, the following may be taken into consideration.

Medical history and chief complaint

Any conditions that might affect the result or influence candidacy for surgery are noted here. Consideration for referral for medical clearance as indicated.

Dental history

Ascertain the patient's expectations, past dental history with dental failure, e.g. periodontal disease, admitted or known habits including clenching and bruxing.

Radiographic analysis

Initial radiographic evaluation may be done with the help of a panoramic radiograph (OPG).

Upon the discretion of the practitioner, a full mouth periapical series (FMX/FMS) may be considered. It is recommended to perform a medical (CB)CT scan analysis prior to the final decision.

Intra- and extraoral examination

For patients with existing non-restorable teeth, documentation of the findings for their removal is noted. A screening exam for intraoral soft tissue health is paramount. Evaluation of the temporomandibular joint (TMJ) is also recommended.

Pre-surgical evaluation of maxillary sinus health

3D radiographic survey allows for the identification of the following in the maxillary sinus:

-Maxillary sinus polyps

Thickness of the Schneiderian membrane

Potential air-fluid level

Patency of the osteomeatal complex

A healthy maxillary sinus is essential for the placement of zygoma implants.

Any pathology of the maxillary sinus must be considered a contraindication of the zygoma implant placement.

SURGICAL PROCEDURE

Make incision

Make an incision on the crest of the edentulous maxilla with distal vertical releasing incision.

Reflect a full thickness mucoperiosteal flap exposing the lateral maxillary wall.

Be aware of anatomical landmarks

It is imperative to be aware of neighboring arteries, veins and nerves in the surgical area. Injuries to these anatomical structures can lead to complications such as eye injury, extensive bleeding, and nerve-related dysfunction.

1 Posterior wall of the maxillary sinus

2 Zygomatic-maxillary buttress

3 Infraorbital foramen

4 Frontozygomatic notch

Dissect to the level of the infraorbital foramen

Expose the alveolar crest, including its palatal side.

Dissect carefully to the level of the infraorbital foramen. Identification of the infraorbital foramen may assist with anatomic orientation.

Expose zygomatic body


Reflect laterally at the level of the infraorbital nerve and expose the body of the zygomatic bone.

Caution: It is essential to identify and protect the infraorbital nerve.

Place retractor to visualize apical point of implant

Place a retractor in the frontozygomatic notch to facilitate visualization of the intended apical point of the implant (with special emphasis on avoiding penetration of the orbital floor).


When the dissection is complete, the landmarks 1–4 will be visible.

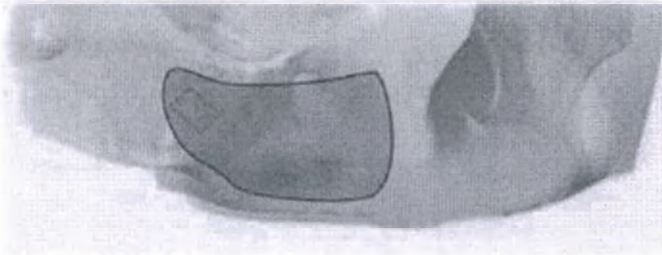

Make window


Make an approximately 10 mm × 5 mm window on the lateral wall of the sinus, close to the infrazygomatic crest.

Lift sinus mucosa

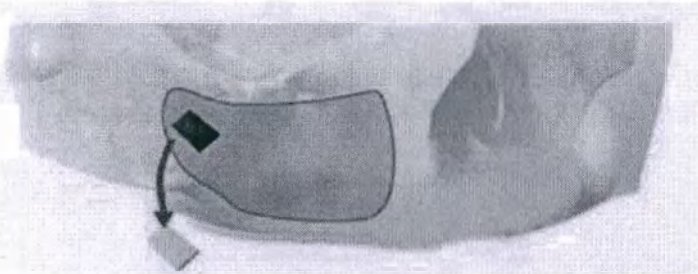

Carefully lift the sinus mucosa away from the area where the implant will pass through the sinus, from the floor of the sinus to the roof, trying not to penetrate the membrane.

Caution: Try to keep the sinus membrane intact during this process. However, penetration of the sinus membrane will not result in an adverse outcome.

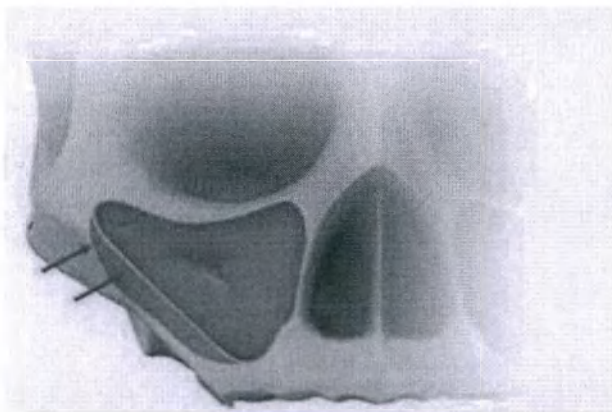

Identify implant trajectory and starting point for drilling

–Identify the trajectory of the implant by placing the round bur over the lateral wall of the maxilla:

- The tip of the bur at the frontozygomatic notch
 - The body of the bur over the posterior lateral corner of the maxillary sinus
 - The base of the bur at the crest of the ridge in the 2nd bicuspid / 1st molar position


–Determine the exact point on the alveolar crest at which to start the drilling sequence, and the direction of the long axis of the implant, based on the known anatomy of the maxilla, the sinus, and the zygomatic bone.

–Aim for the middle of the retractor during the drilling sequence.

Plan implant placement

Plan to place the implant as posteriorly as possible, with the implant head as close to the alveolar crest as possible (typically in the 2nd premolar region.) The implant must simultaneously pass through the floor of the sinus and the maxillary sinus, enter the base of the zygoma bone (the posterior-lateral portion of the maxillary sinus roof) and travel through it, exiting through the lateral cortex of the zygoma below the frontozygomatic notch

Note: Adjustment to this implant placement may be considered due to anatomical variations.

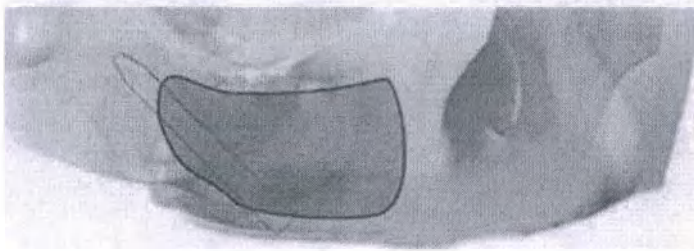

OSTEOTOMY PREPARATION.

Drill technique


- Use an in-and-out motion and drill into the bone for 1 to 2 seconds.
- Move the drill up without stopping handpiece motor. This also allows the irrigation to flush away debris.
- Proceed until desired depth is reached.
- Do not exceed 2000 rpm when drilling.
- Copious irrigation is recommended throughout the drilling sequence. Notes:
- Round bur, twist drills and pilot drills are delivered nonsterile and need to be sterilized prior to use.
- Drills are disposable and should be used for one surgery only.
- The twist drills and pilot drills are made of stainless steel with an amorphous diamond coating, which gives them their black color.

Caution:

- Avoid lateral pressure on drills during implant-site preparation. Lateral pressure may cause drill fracture.
- Verify that drills lock in the handpiece before starting any drilling. A loose drill may accidentally harm the patient or members of the surgical team.
- Verify that all interconnecting instruments lock properly before intraoral use to prevent accidental swallowing or aspiration.

Depth measurement system


All drills are available in a short and a long version

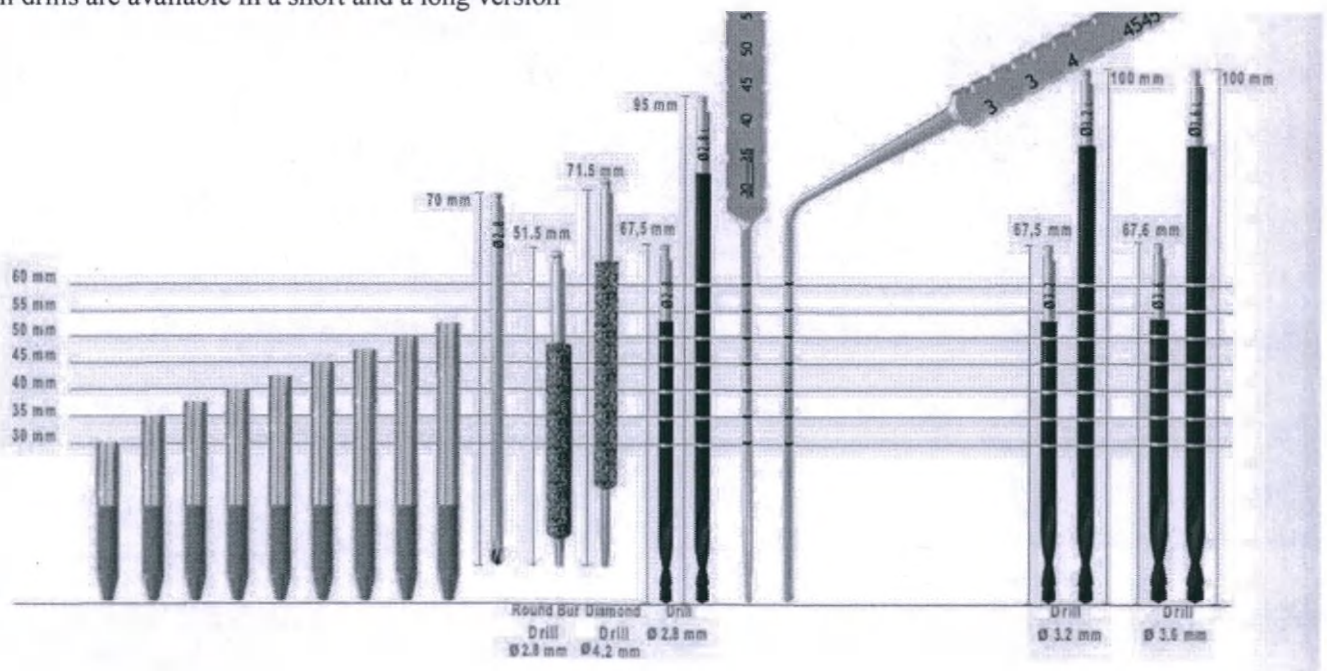

Make entrance mark with round bur

- Make the palatal/cresal mark for the implant entrance with the round bur.
- Penetrate and pass the round bur through to the sinus while checking the direction of the bur through the sinus window. The bur must be directed towards the retractor that was previously placed in the notch.


–Make an entrance mark in the posterior-superior roof of the sinus to allow seating of the 2.8 mm drill without chatter. Maximum speed 2000 rpm.

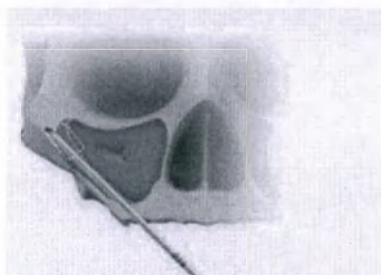

Drill with Twist Drill 2.8 mm


Continue with the Twist Drill 2.8 mm until it penetrates the outer cortical layer of the zygomatic bone at the incisura.

Maximum speed 2000 rpm.

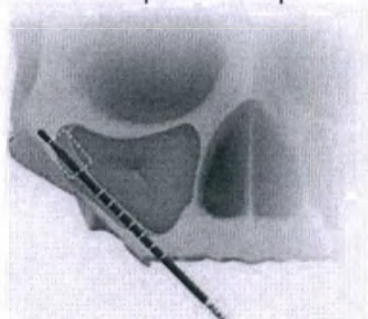

Determine implant length

Use the Straight Depth Indicator to determine the required implant length

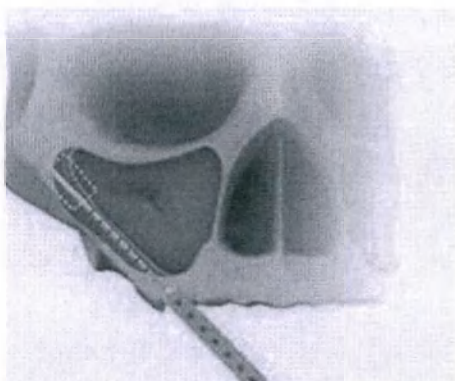

Widen osteotomy with Twist Drill 3.2 mm


Maximum speed 2000 rpm.

Finalize osteotomy with Twist Drill 3.6 mm in case of dense bone.

Maximum speed 2000 rpm


Caution:

- Ensure correct angulation and avoid drill wobble, as this can inadvertently widen the preparation site.
- If the sinus membrane cannot be kept intact during osteotomy preparation, carefully irrigate away debris when inserting the implant. Any mucosal remnants in the bone site may prevent osseointegration of the implant.

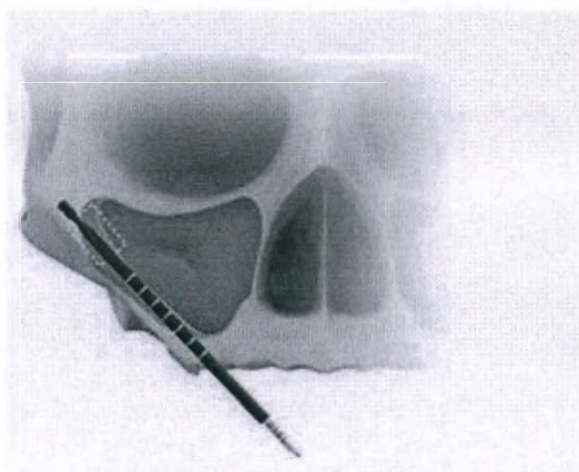

Verify depth

Verify the depth of the prepared bone site with the Angled Depth Indicator to ensure that the selected implant length will fully seat without apical bone interference.

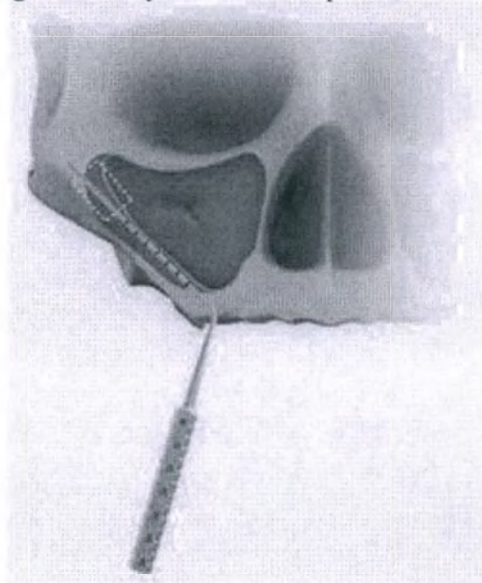

IMPLANT INSERTION/PLACEMENT

1 Unpack the implant

Each implant is protected by a sterile barrier with above a printed label containing variable data:

Diameters, length

REF implant, lot number, raw materials, expiry date



Before use check the integrity of the sterile barrier, check that the welds are intact, and the Tyvek is not damaged or cut and that there are no detachment points from the plastic laminate blister.

The blister label shows the symbol SBS indicating the "aseptic presentation" which denotes the presence of the external sterile barrier (consisting of the closed blister) which contains an additional pack-aging system (vial with cap) to minimize the risk of contamination after opening the single package.

Step-1 Open the blister and remove the vial

Open by pulling the peel tab located on the lower left corner of the blister. Attention: the blister guarantees the sterility of the implant. Open the blister only immediately before inserting the implant.

Step 2 Remove the cap via



2 Pick up the implant

The final placement of the dental implant, depending on the clinical situation, can be carried out with one of the following methods:

1. The dynamometric key
2. The surgical engine
3. The surgical driver

Use the dynamometric key

Connect the implant driver to the dynamometric key with the mounted surgical adapter.



To connect the implant put light pressure on the driver.




Insert the implant in the previously made osteotomy.

Use of the surgical engine

Connect the implant driver to the hand piece.

To connect the implant, apply light pressure on the driver.

Slowly insert the implant in the previously made osteotomy.
(25 rotations/minute)

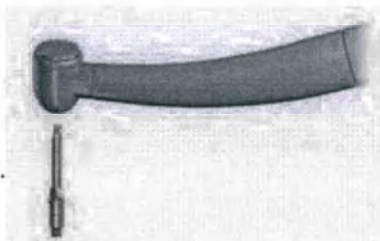

Use of the surgical driver

It is also possible to use the surgical driver to position the implants.

Connect the implant driver to the surgical driver.


To connect the implant, apply light pressure on the driver.

Insert the implant in the osteotomy previously carried out.



Important: An excessive torque on the implant may compromise the integrity of the internal connection and put excessive pressure on the surrounding bone, negatively affecting bone integration. The implant insertion torque cannot exceed 80 Ncm.

Place the implant

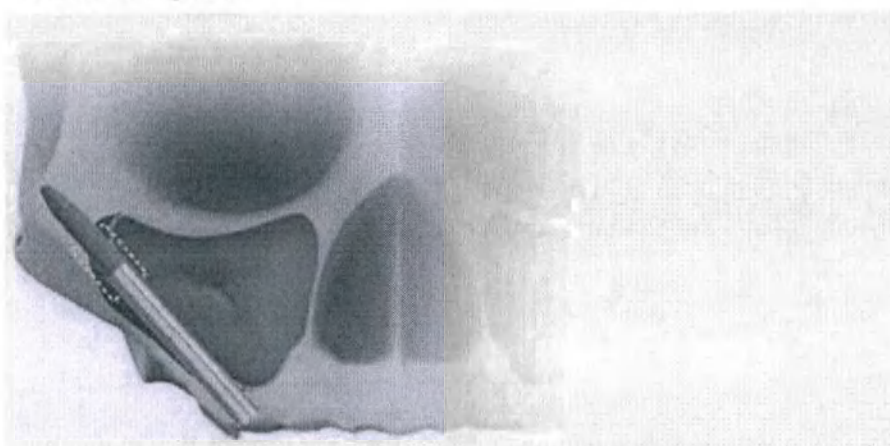

–Insert the implant in the prepared bone site with 20 Ncm setting on the drilling unit. The setting may be increased to 50 Ncm to facilitate implant insertion.

–Confirm the correct insertion angle of the implant while continuing through the sinus until the implant apex engages in the zygomatic bone.

Tighten manually the implant with the JD torque wrench

Verify the correct position of the implant

Place the implant

The anterior maxillary implants are placed according to their surgical protocol.

Close and suture tissue flap around the implant using desired technique.

There are two options for finalizing the implant surgery.

Two-stage delayed function

Use the JD Screwdriver to connect a cover screw to the implant. Suture tissue flap using desired technique.

Note: Be sure to relieve denture intaglio (tissue) surface to avoid contact between implants and denture.

or

One-stage Immediate Function

Provisionalize implants for Immediate Function on abutment level by fabricating a provisional bridge using JD Conical Abutments in combination with JD Temporary Cylinder Abutments for Conical abutments.

JD NASAL

The clinician must attend a specific advanced training beyond the supervision of expert implantologists about the JDNasal® implant placement. In a severely resorbed maxilla, JDNasal® Implants can be used to make use of the maxillary bone surrounding the nose. The implant site begins in the alveolar bone at the pre-molar and ends in the bone separating the maxillary sinus and nasal cavity. The specialized implants need to be extra-long to span across the sinus. It is important to note that bone grafting is recommended when the alveolar bone thickness is less than 3mm.

Radiographic examination

As with any implant patient case, a radiographic assessment is essential. As far as the Nasal Implant protocol is concerned, the main objectives are twofold:

1. To detect the presence of any pathology in the maxillary sinuses, bearing in mind that the thickness of the antral mucosa should not exceed 6mm.
2. To evaluate the volume of the maxillary bone surrounding the nose.

NASAL ANCHORAGE.



In a severely resorbed maxilla Nasal Implants can be used to make use of the nasal bone. JDNasal Implants enable use of the maxillary bone surrounding the nose. The implant site begins in the alveolar bone at the pre-molar and ends in the bone separating the maxillary sinus and nasal cavity. The specialized implants need to be extra-long to span across the sinus and they need to be angulated. JDNasal

Implant is available up to a length of 26mm. Full product details and drilling protocol follow overleaf. The surgeon can choose to add a bone graft or not.

It is mandatory to have no signs of sinus infection before deciding to proceed with this procedure.

The drills provided with the surgical kit must be used with external irrigation to prevent excessive heating of the bone tissue.

Drilling must be interrupted if it is not possible to verify irrigation. Drill with an in and out pumping motion without excessive force. When doing this movement, you will have to take out the drill completely to check that irrigation is taking place correctly.

Drills are characterized by their inclined wedges allowing the homogeneous distribution of the cooling physiological solution, as well as the conservation of cortical bone shavings resulting from the drilling process after the preparation. If the sharpness of the drill diminishes, the latter must be pulled out of the handle for cleaning. Proceed until you are able to take the drill to the desired depth. Should there be adjacent natural teeth interfering with the head of the contra-angle, the drill extension must be used.

It is advisable to use surgical motors with adjustable speed and torque.


Important: The initial drill head is of the precision type. Drill heads must be substituted approximately every 20 osteotomies, or when their cutting efficiency diminishes.

Non Guided Protocol

0. Initiate the site preparation with the Ø2mm JDNasal drill through the alveolar bone.
It is advised to open a window in the lateral sinus wall and gently reflect the Schneiderian membrane without perforating it.
1. If the alveolar has more than 3mm of good bone, use the Ø2mm JDNasal drill to drill through the alveolar, into and across the sinus, engaging the lateral nasal wall.



2. The 26mm depth probe can be used to palpate the hole depth for implant selection.

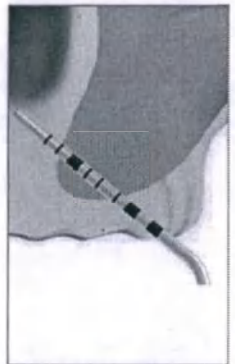

3. Drill to final depth with the Ø2.4mm JDNasal drill.



4. Continue with standard twist drill Ø2.8 mm at the entrance for 6 mm.



5. Continue the osteotomy with standard twist drill Ø3.2 mm at the entrance for 6 mm.




6. Complete the osteotomy with standard twist drill Ø3.6 mm at the entrance for 6 mm.



7. Place the implant till to reach the final position.



8. NB: The surgeon can choose to open a window in the lateral sinus wall. Gently reflect the Schneiderian membrane and insert bone graft into the sinus.

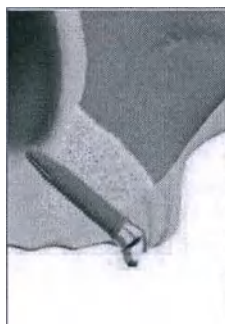


Computer Guided Protocol

1. Start the osteotomy using the first JDGuided Drill JDGD24-060 Ø 2.4 x L 6 mm.
2. Continue using JDNasal® Guided Drill Ø 2.0 at the same implant length to be inserted (Choose among JDNasal® Guided drills L 20-22-24-26 mm).
3. Continue using JDNasal® Guided Drill Ø 2.4 at the same implant length to be inserted (Choose among JDNasal® Guided drills L 20-22-24-26 mm).
4. Continue with JDGuided Drill Ø2.8 mm x L 6 mm.
5. Continue the osteotomy with JDGuided Drill Ø3.2 mm x L 6 mm.
6. Complete the osteotomy with JDGuided Drill Ø3.6 mm x L 6 mm.

PROSTHETIC PROCEDURE

FINALISATION OF THE IMPLANT SURGERY

There are three options for the finalization of the implant surgery intervention using J Dental Care implants

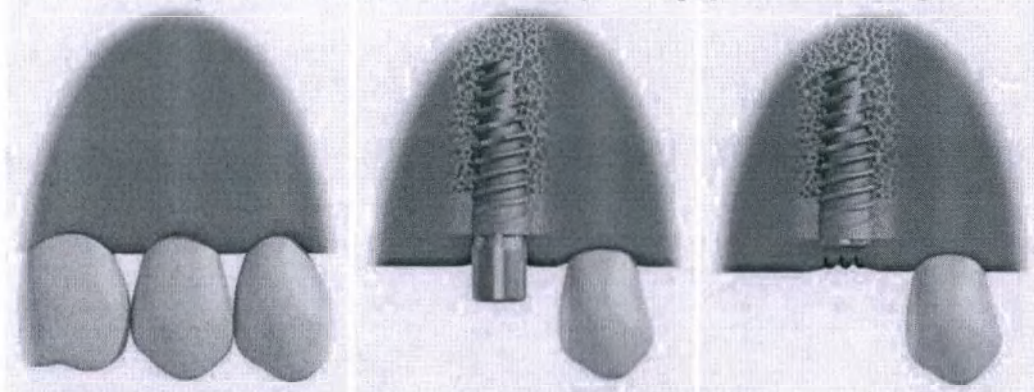

Immediate loading

If the implant is inserted with high primary stability it is possible to fix a provisional prosthesis using the J Dental Care provisional components or definitive abutments (consult the aforementioned procedures).

Non-submerged healing

Screw into the implant a healing abutment, adapt soft tissue and suture.

Submerged healing

Screw a cover screw into the implant and suture with preferred technique.

Depending on the clinical situation and the choice of the surgeon, there are three options to anchor prosthetic components of the J Dental Care system:

1. Using the dynamometric key: connect the dynamometric key to the prosthetic adapter and using the screw driver proceed to screw in the prosthetic components.



2. Using a surgical engine connected to a machine screw driver.



3. Using a manual screw driver. Connect the prosthetic adapter to the machine screw driver and manually screw in the prosthetic component.



HEALING ABUTMENT



Indications: closing of the implant connection for non-submerged healing. Connect the healing abutment of the correct diameter and height.



Adapt the soft tissues and suture them around the healing abutment.

The exclusive design of the healing abutment with integrated Platform Switching ensures soft tissue formation of greater thickness. This translates into greater long-term stability of these tissues, and into limited crestal bone resorption.



IMPRESSION TECHNIQUES

Impression techniques used in the implant treatment are:


Closed tray
Open tray
Conventional

Closed tray impression technique

This technique is recommended for single unit restorations or multiple unit restorations where implants are placed sufficiently parallel to each other's.


The laboratory receives the impression coping with the impression. Connect a replica of the corresponding implant or abutment to the closed tray coping and then insert the impression coping in its recorded place in the impression.

Pour the impression with material for soft tissue and plaster.

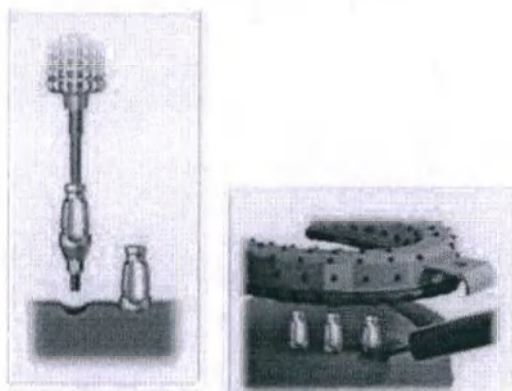

Open tray impression technique

This technique is recommended in multiple unit restorations where the absence of parallelism would hinder the removal of a closed tray impression and distort the impression. A limitation can be the absence of sufficient space due to a limited mouth opening in the posteriors. After removing the impression from the mouth along with the impression copings, attach to the latter the corresponding implant or abutment replica. Pour the impression with material for soft tissue and plaster.

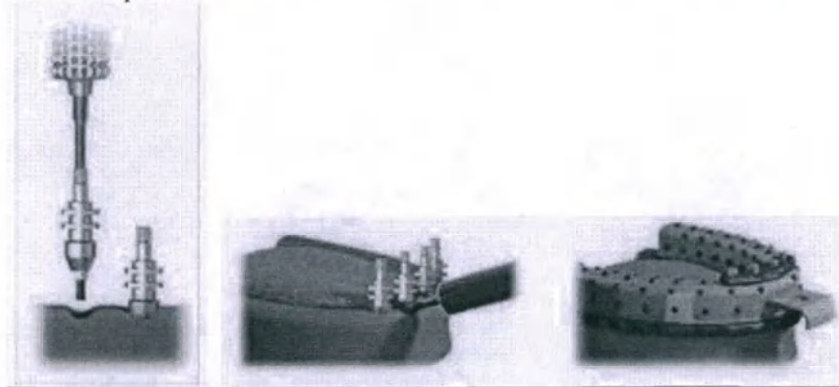

Implant level impression

Transfer the position of the implant in the mouth of the patient to a master model so as to select a prosthetic abutment that is adequate for the treated clinical case and for the dentist's requirements.


Abutment level impression

The abutment is selected, positioned, and placed by the dentist. To transfer the position of the abutment in the mouth of the patient to the prosthetic model it is necessary to use an impression coping specific for the selected abutment. The prosthetic restoration will be undertaken in a way adaptable to the abutment



Conventional impression

This technique is used when the dentist selects and modifies a definitive abutment to cement a single or multiple unit restorations (crown and bridge technique). The abutment is affixed to the implant, modified using conventional preparation methods directly in the mouth, using high speed handpiece with abundant irrigation. Perform a conventional impression of the abutment or abutments previously prepared in the mouth (it is recommended to use a retraction cord).

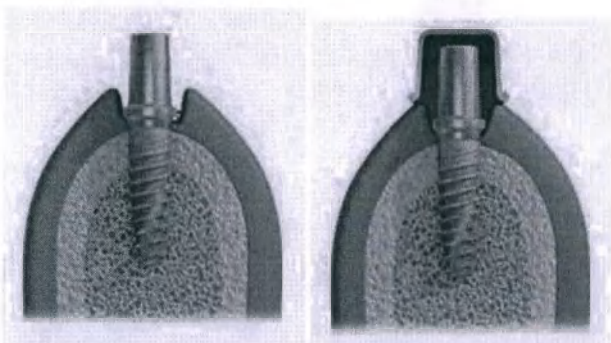

TEMPORARY SOLUTIONS FOR THE DENTAL LABORATORY



TEMPORARY ENGAGING



TEMPORARY NON

ABUTMENT

Indications: screwed-in temporary of single implant cases and cemented temporaries of multiple implant cases

ENGAGING ABUTMENT

Indications: screwed-in temporaries of multiple implant cases

For cemented crowns and bridges

Pour and make a master model using the corresponding replica.

Position, and affix to the replica, the temporary engaging abutment.

Modify the temporary abutment in function of the existing situation in the mouth of the patient, verifying the necessary occlusal space for the covering materials (do not reduce the abutment to less than 4 mm in height).

Make the crown or bridge to be cemented using conventional processes.

Position the temporary abutment on the implant and screw in manually or with the dynamometric key, with a torque set between 15 and 35 Ncm. Cover the head of the screw with cotton and temporarily seal the screw channel.

Fill the inside of the crown or the bridge with temporary cement, and place it on the prepared temporary abutment(s).

For screwed-in crowns and bridges

Pour and make a master model using the corresponding replica.

Position, and affix the temporary abutment to the replica.

Modify the temporary abutment in function of the existing situation in the mouth of the patient, checking the necessary occlusal space for the covering materials (do not reduce the abutment to less than 4 mm in height).

Temporarily seal the screw channel (with cotton, for example) and make a screwed-in crown or bridge with conventional procedures.

Position the temporary abutment on the implant and screw in manually or using the dynamometric key, with a torque ranging between 15 and 35 Ncm.

Cover the screw channel with cotton and seal it temporarily with a temporary filling material (composite for example).

Note: To verify the correct adaptation of the abutment to the implant it is necessary to make an X-ray control.

CHAIR-SIDE TEMPORARY RESTORATIONS

GP ABUTMENT



Indications: cemented temporary restorations of single and multiple implants.


Place the abutment onto the implant and screw it. Verify the direction and the length of the GP abutment in respect of the adjacent teeth/implants and the necessary occlusal space for the covering materials.

Unscrew the abutment, push it onto an implant replica and modify it in function of the existing situation (do not reduce the abutment to less than 4 mm in height).

Place the modified GP abutment onto the implant and screw it in with a torque of 20 Ncm using the dynamometric key or a surgical motor connected to the machine screwdriver.



Note: to verify the correct adaptation of the abutment to the implant it is advisable to make an X-ray control. A provisional restoration can be relined with acrylic resin directly in the mouth, refined, polished and cemented with temporary cement. The GP abutment can be used also as a definitive abutment. After tissue healing it is possible to perform a conventional impression of the abutment (it is recommended to use the retraction cord) to make the definitive prosthesis.

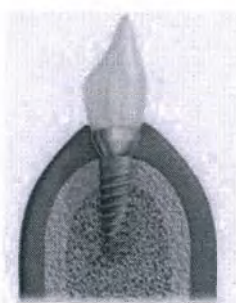

ABUTMENT SELECTION

Selection of the final abutment is decisive for the final result of the prosthesis to comply with the functional and esthetic requirements of the dentist and patient. The dentist can choose the abutment and subsequently send to the laboratory an impression taken at the abutment level, or can take a direct implant level impression and later communicate to the dental technician which abutment to use.

For the selection of the final abutment, it is necessary to consider certain aspects.

Prosthesis Type

Cemented prosthesis

Cemented prosthesis are placed using the same conventional protocols that are used in the techniques of cemented crowns and bridges over natural teeth. The abutments are screwed in to the implants and the prosthesis is cemented on top of them.

Screwed-in prosthesis

A screwed-in prosthesis is affixed with screws through the occlusal part of the prosthesis. The screw goes through the crown and goes into the abutment or into the implant. The prosthesis may be unscrewed at any time by the dentist.

Soft tissues height

To determine the correct height of the soft tissue, measure with a probe the depth of the latter around the implant. The selection of the abutment transgingival height will depend on the hygienic and the esthetic considerations of the dentist.

Interdental space and emergence profile

Available interdental space and emergence profile requirements are key to abutment selection.


Angling

Angling of the implant also determines which abutment can be used, straight or angled, or if it is necessary to use a customized abutment.


PROSTHESIS TYPES



Single cemented prosthesis / Multiple cemented prosthesis

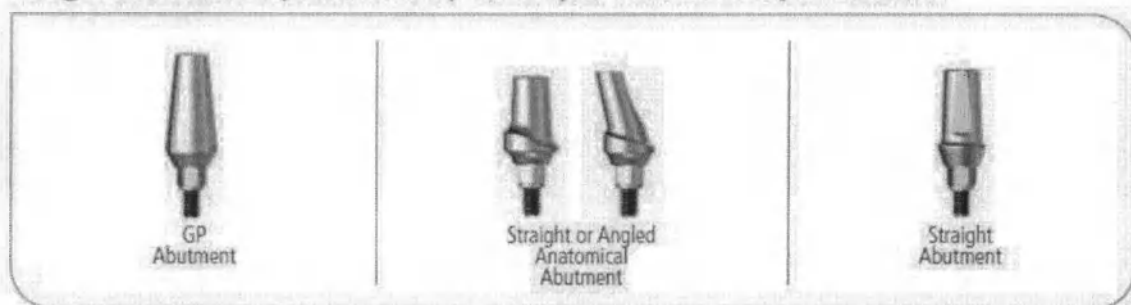


Screwed-in prosthesis

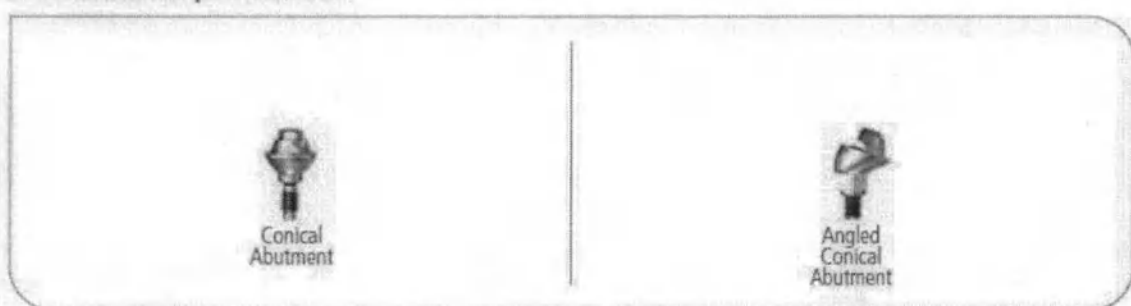

Overdentures with bar fastening



Overdenture

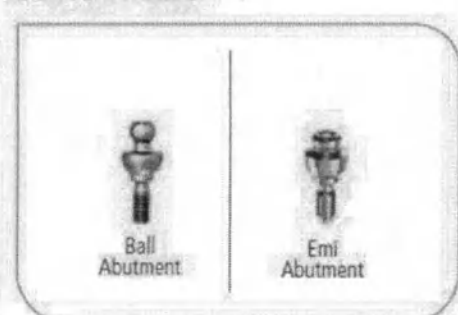

WARNING:

Small diameter implants and angled abutment are not recommended for the posterior region

CEMENTED PROSTHESIS

Straight Abutment



Indications: single or multiple unit cemented prosthesis

The laboratory receives an impression at the implant level with a replica of the implant.

Pour and make a master model.

Select the titanium abutment that is suitable in function of the height of the soft tissues and affix it to the implant replica with a laboratory screw.

Modify the abutment and fabricate the prosthesis using conventional prosthetic techniques (do not reduce the abutment to less than 4mm in height).

Anatomical Abutment



Indications: single or multiple unit cemented prosthesis

The anatomical abutment has been designed with an anatomical festoon preparation of the cervical margin. This ensures lesser need of abutment preparation and a better adaptation to the natural profile of soft tissues, given that it is available with different heights.

The description of straight anatomical abutment that follows is applicable also to 15° angled anatomic abutment.

- The laboratory receives an impression at the implant level with an implant replica.
- Pour and make a master model.
- Select the anatomical abutment and affix it to the replica of the implant with a lab screw.
- Modify the abutment and fabricate the prosthesis using conventional prosthetic protocols (do not reduce the abutment to less than 4mm in height).

SCREWED-IN PROSTHESIS

Conical Abutment




Indications: screwed-in prosthesis

The conical abutments are intended only for multi-units restorations, with not angulation corrections.

Connection of the straight conical abutment

Screw in the conical abutment onto the head of the implant in the correct position using the plastic transporter.

If height is insufficient the transporter can be cut. Once in position the plastic transporter can be manually detached from the abutment. To verify the correct adaptation of the abutment to the implant it is recommended to make an X-ray control. Screw in the abutment at 35 Ncm using the dynamometric key or the surgical motor/engine connected to the screw driver.

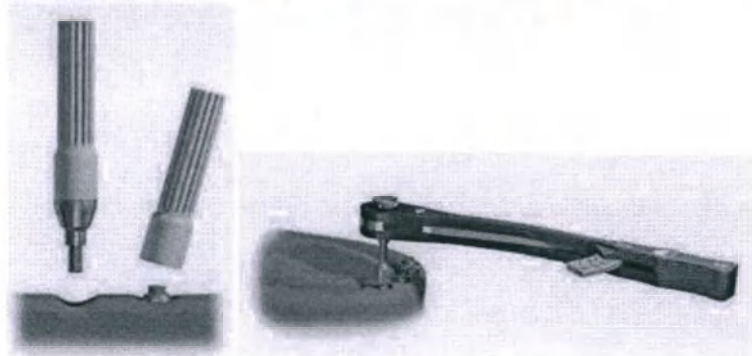

Connection of the conical abutment angled at 17° and 30°

The abutment can be connected easily by way of its preassembled transporter.

Take into account that various positions are possible for the placement of the abutment.

Screw in until you note an amount of resistance.

To verify the correct insertion of the abutment into the implant it is advisable to take an X-ray control.

Withdraw the transporter manually and screw in at 35 Ncm using the dynamometric key or the surgical engine connected to the screw driver.




Closed tray impression for conical abutment

Place the impression copings on the conical abutments.

Inject impression material and take the impression.

Once the material is solid, remove the impression and take out the impression copings to attach the replicas and correctly reposition into the cast.

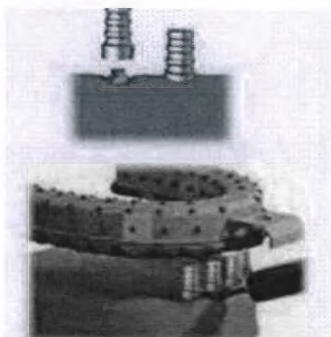


Open tray impression for conical abutment

Place the impression copings on the conical abutments.

Inject impression material around the impression copings and inside the impression tray.

Position the tray in the mouth and ensure that you see all the guide screws of the impression copings emerge.

Once the material is solid, unscrew the guide screws to withdraw the impression copings along with the impression.

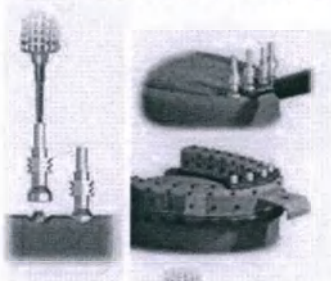

Laboratory procedure


The laboratory receives a conical level impression and connects conical abutment replicas to the impression copings. Pour and make a master model.

Affix the wax-up abutment for conical abutment on its replicas.

Enclose and make an infrastructure with the conventional techniques.

Cover the infrastructure with veneering material and send the finished prosthesis to the dentist.

Note: it is possible to make a provisional prosthesis on the conical abutments using the temporary cylinder for conical abutment.

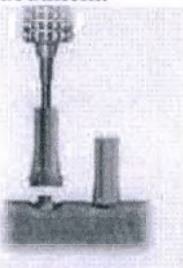


Connection of the final prosthesis

Connect the prosthesis to the conical abutment with the prosthetic screws.

Starting from the central zone, adjust the other screws, alternating the left with the right side.

Screw in the prosthetic screw at 15 Ncm using the dynamometric key or the surgical engine connected to the screw driver.

Cover the access channels of the screws with cotton and seal them with a temporary filling material (composite for example).

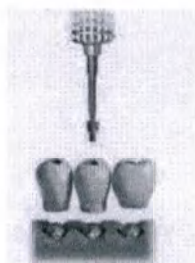

GP Abutment for Conical Abutment



Indications: cemented temporary restorations of multiple implants with Conical Abutments.

After positioning the Conical Abutments, place the GP abutments for Conical abutments and screw them. Verify the direction and length of the abutments in respect of the adjacent teeth/implants and the necessary occlusal space for the covering materials.

Unscrew the abutments, push them onto a conical abutment replica and modify them in function of the existing situation (do not reduce the abutment to less than 4 mm in height).



Place the modified GP abutments and screw them with a torque of 20 Ncm using the dynamometric key or a surgical motor connected to the machine screwdriver.



A provisional restoration can be relined with acrylic resin directly in the mouth, refined, polished and cemented with temporary cement.



OVERDENTURE

Ball Abutment

Indications: overdentures with ball anchoring.



Emi Abutment

Indications: overdentures with emi anchoring.



Connection and impression

Screw in the ball abutment or the emi abutment to the head of the implant with the screwdriver.

To check the correct adaptation of the abutment to the implant it is advisable to take an X-ray control.

Take the impression in the conventional way. When the material is solid you can take out the cast and connect the ball abutment or the emi abutment replicas.



Laboratory procedures

The laboratory receives an impression at the abutment level with positioned replicas of the ball abutments or the emi abutment.

Pour and obtain a master model.

Block the abutment replicas and prepare an occlusal rim.


Send to the dentist for interocclusal records.

Prepare a teeth set up using the conventional technique.

Position the metal female pieces in the replicas of the ball abutments or the emi abutment so that they are parallel to each other with respect to the horizontal and vertical planes.

Block the space between the female piece and the replica.

Cure and finish the prosthesis using the conventional technique.
Send to dentist for delivery.

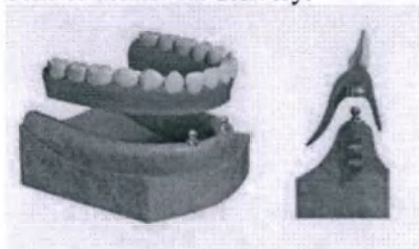

7. Contraindications.

The placement of dental implants may be precluded by patient's conditions that are contraindications for surgery.

Absolute contraindications: allergy to titanium, recent myocardial infarction, valvular prosthesis, severe kidney disorders, severe liver disorders, treatment-resistant diabetes, recent high-dose radio therapy, severe chronic alcoholism, drug use, terminal illness and tumors.

Relative contraindications: chemotherapy, minor kidney disorder, minor liver disorders, endocrine disorders, psychological and psychic disorders, lack of understanding and motivation, AIDS, HIV positive cases, prolonged use of corticosteroids, calcium phosphorus metabolism disorders, erythropoietic disorders, nicotine poisoning.

J Dental Care dental implants should not be placed in patients where the remaining jaw bone is too diminished or quality bone is poor to provide an adequate primary stability.

JDIcon Ultra.S implants should not be placed in patients with bruxism or parafunctional habits. **JDIcon Ultra.S** implants should not be placed in single tooth implant replacement in premolar and molar areas.

JDNasal and **JDZygoma** implants must not be placed in patients with pathology in the maxillary sinus or in patients with anatomy defects in the maxillary sinus.

8. Adverse effects.

Potential adverse effects associated with the use of dental implants can include:

- Failure of osseointegration
- Loss of osseointegration
- Dehiscence requiring bone grafting
- Perforation of the maxillary sinus (for JDEvolution, JDIcon, JDIcon Ultra.S)
- Lesion of the inferior alveolar nerve (for JDEvolution, JDIcon, JDIcon Ultra.S)
- Persistent pain, numbness, paresthesia
- Inflammation or infection
- Excessive bone loss requiring intervention
- Implant breakage

9. Caution.

Never exceed insertion tightening torque of 60 Ncm for the implant and 20 Ncm prosthetic tightening torque for abutment screw (for JDIcon Ultra.S)

10. Warnings.

It is recommended that clinicians, new as well experienced implant users, are updated on the J Dental Care dental implants and abutments features and their surgical applications. For detailed information about method of use of J Dental Care dental implants and abutments please consult the surgical manuals.

Excessive bone loss or breakage of implant may occur when implant is loaded beyond its functional capability. Physiological and anatomic conditions may negatively affect the performance of dental implants. This should be taken into consideration when placing dental implants in patients with the following conditions:

- poor quality bone
- poor oral hygiene*
- medical conditions such as blood disorders or uncontrolled hormonal conditions

*Periodic checks for plaque on the zone of the implants through close-up recall sessions (every 4-6 months) in order to prevent the formation of perimplantitis, are indispensable.

The device is single use. Do not re-use and dispose after use in accordance to the regulations. Any re-use can jeopardize or seriously aggravate the health status due to risk of infections to the patient and/or the user and for the loss of functionality and efficiency of the device.

Small diameter implants and angled abutment are not recommended for the posterior region.

The J Dental Care implant system has not been evaluated for safety and compatibility in the MR environment. It has not been tested for heating, migration, or image artifact in the MR environment. The safety of J Dental Care implant system in the MR environment is unknown.

11. Precautions

JDEvolution implant simplifies the surgical techniques required to place dental implants, but the clinician must attend a specific training beyond the supervision of expert implantologists about this technique. Improper technique can lead implant failure or loss of supporting bone or inadequate primary stability or other adverse effects. Thorough screening of implants candidates should be performed included an evaluation of patient capacity to maintain a correct oral hygiene, the patient motivation, the presence of parafunctional habits. Visual inspection as well as periapical radiographs is essential to determine anatomical landmarks, occlusal conditions, periodontal status and adequacy of bone. It is strongly suggested TAC dentaScan to provide a real evaluation of dimensions and quality of bone.

JD Nasal

Improper technique can lead implant failure or loss of supporting bone or inadequate primary stability or other adverse effects. Thorough screening of implants candidates should be performed included the absence of maxillary sinus pathology, and evaluation of patient capacity to maintain a correct oral hygiene, the patient motivation, the presence of parafunctional habits. Visual inspection as well as periapical radiographs is essential to determine anatomical landmarks, occlusal conditions, periodontal status and adequacy of bone. It is strongly suggested TAC dental scan to provide a real evaluation of dimensions and quality of bone.

General

The clinician must attend a specific advanced training beyond the supervision of expert implantologists about the JD Nasal implant placement.

In a severely resorbed maxilla, JD Nasal implants can be used to make use of the maxillary bone surrounding the nose. The implant site begins in the alveolar bone at the pre-molar and ends in the bone separating the maxillary sinus and nasal cavity. The specialized implants need to be extra-long to span across the sinus. It is important to note that bone grafting is recommended when the alveolar bone thickness is less than 3mm.

Radiographic examination

As with any implant patient case, a radiographic assessment is essential. As far as the Nasal implant protocol is concerned, the main objectives are twofold:

1. To detect the presence of any pathology in the maxillary sinuses, bearing in mind that the thickness of the antral mucosa should not exceed 6mm.
2. To evaluate the volume of the maxillary bone surrounding the nose.

Site preparation sequence

0. initiate the site preparation with the diameter 2 mm JD Nasal drill through the alveolar bone. It is advised to open a window in the lateral sinus wall and gently reflect the Schneiderian membrane without perforating it.

1. If the alveolar has more than 3 mm of good bone, use the diameter 2 mm JD Nasal drill to drill through the alveolar, into and across the sinus, engaging the lateral nasal wall. It is optional to reflect the Schneiderian membrane of the sinus.

2. The 26 mm depth gauge can be used to palpate the hole depth for implant selection
3. Drill to final depth with the diameter 2.4 mm JDNasa drill.
4. Continue with standard twist drill diameter 2.8 mm at the entrance for 6 mm.
5. Complete the osteotomy with standard twist drill diameter 3.2 mm at the entrance for 6 mm.
6. Place the implant till to reach the final position.
7. NB: The surgeon can choose to open a window in the lateral sinus wall. Gently reflect the Schneiderian membrane and insert bone graft into the sinus.

JDZygoma

Improper technique can lead implant failure or loss of supporting bone or inadequate primary stability or other adverse effects. Thorough screening of implants candidates should be performed included the absence of maxillary sinus pathology, and evaluation of patient capacity to maintain a correct oral hygiene, the patient motivation, the presence of parafunctional habits. Visual inspection as well as periapical radiographs is essential to determine anatomical landmarks, occlusal conditions, periodontal status and adequacy of bone. It is strongly suggested TAC dental scan to provide a real evaluation of dimensions and quality of bone.

General

The clinician must attend a specific advanced training beyond the supervision of expert implantologists about the JDZygoma implant placement.

JDZygoma implants are designed to reach and make use of the zygomatic bone. JDZygoma implants can be tilted up to 45° from the occlusal plane.

The implant site begins with the exposure of the maxillary lateral wall, a mucoperiosteal flap and total thickness is raised by making a crest incision with bilateral distal vertical incision on the tuberosity areas. During the surgical exposure of the lateral wall of the jaw it is absolutely necessary to pay attention to the vertical structures, including nerves, veins and arteries. Injuries to these anatomical structures can lead to complications such as traumas of the eye, as well as extensive bleeding and disfunctions associated with the nerves. In general the most notable risks associated with the Zygoma implants are sinusitis and fistula formations.

Radiographic examination

As with any implant patient case, a radiographic assessment is essential. As far as the Zygoma implant protocol is concerned, the main objectives are twofold:

1. To detect the presence of any pathology in the maxillary sinuses, bearing in mind that the thickness of the antral mucosa should not exceed 6mm.
2. To evaluate the volume of the maxillary bone surrounding the Zygomatic cavity.

Site preparation sequence

Make entrance mark with the round bur drill and continue with the drill diameter 2.8 mm until it penetrates the outer cortical layer of the zygomatic bone. Continue with the drill diameter 3.2 mm and if the bone is hard, complete the osteotomy with the drill diameter 3.6 mm.

12. Sterilization. Care and cleaning, disinfection.

The product is disposable, does not require cleaning and disinfection.

All implants are delivered sterile and are for single use only prior to the labeled expiration date. Do not re-sterilize. Do not use implants if the package has been damaged or previously opened. Use of non-sterile device may lead to infection of tissues or infectious diseases.

The J Dental Care implants have been sterilized by gamma irradiation and are ready for use.

Open the implant and cover screw case onto a sterile surface.

The product is non-toxic, pyrogen-free.

13. Operating and storage conditions. Shelf life.

The Implant system parts should be kept in their original package, in a dry area at room temperature.

Storage

Temperature	20°±5°C
Atmospheric pressure	N/A
Relative humidity	N/A

Operation

Temperature	20°±5°C
Atmospheric pressure	N/A
Relative humidity	N/A

The shelf life (sterility) of implants is 5 years.

Permanent contact with the internal environment of the body at a temperature: +35°C - +37°C

The implantation period is unlimited, with adequate implantation and hygiene of the oral cavity, implants are installed for life.

14. Warranty obligations.

In the case of failure of an implant or prosthetic component or questions about the quality of a medical device please contact Implant Service LLC

Rozhdestvenka street 5/7, building 2, ☎ 3 pom. V K 4 office 261, Moscow Russia, 107031

Telephone: +79788671550

www.jdentalcare.ru

15. Symbols on packaging descriptions.

SYMBOL	DESCRIPTION
	Manufacturer Logo
	
	Sterile. Sterilized using irradiation
	Do not re-use

	Use-by date
	Batch code
	Catalogue number
	Manufacturer
	CE Mark
	CE Mark
	Attention, see IFU
	Consult instructions for use
	Manufacturing date
	The law restricts the sale of this device to, or on the order of, a li-censed physician or dentist.
	Sterile Barrier System Sterile Barrier with protective packaging inside
	Screwdriver head size 1.27 mm (for prosthetic components)
	Sterilization indicator
	do not use if packaging is damaged
	Keep dry

16. Main parameters, characteristics (features) of medical device.

1	IC39080	JDIcon with cover screw Ø 3.9 L8	Diameter: 3.95 mm 0.00/+ 0.05 mm Length: 8 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.21 g ± 10%
2	IC39100	JDIcon with cover screw Ø 3.9 L10	Diameter: 3.95 mm 0.00/+ 0.05 mm Length: 10 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.26 g ± 10%
3	IC39115	JDIcon with cover screw Ø 3.9 L11.5	Diameter: 3.95 mm 0.00/+0.05 mm Length: 11.5 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.30 g ± 10%
4	IC39130	JDIcon with cover screw Ø 3.9 L13	Diameter: 3.95 mm 0.00/+0.05 mm Length: 13 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.34 g ± 10%
5	IC39150	JDIcon with cover screw Ø 3.9 L15	Diameter: 3.95 mm 0.00/+0.05 mm Length: 15 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.40 g ± 10%
6	IC39180	JDIcon with cover screw Ø 3.9 L18	Diameter: 3.95 mm 0.00/+0.05 mm Length: 18 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.55 g ± 10%
7	IC39200	JDIcon with cover screw Ø 3.9 L20	Diameter: 3.95 mm 0.00/+0.05 mm Length: 20 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.60 g ± 10%
8	IC43060	JDIcon with cover screw Ø 4.3 L 6	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 6 mm +0.10 / 0.00 mm Mass: 0.19 g ± 10%
9	IC43080	JDIcon with cover screw Ø 4.3 L 8	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 8 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.25 g ± 10%
10	IC43100	JDIcon with cover screw Ø 4.3 L 10	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 10 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.33 g ± 10%
11	IC43115	JDIcon with cover screw Ø 4.3 L 11.5	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 11.5 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.38 g ± 10%
12	IC43130	JDIcon with cover screw Ø 4.3 L 13	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 13 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.44 g ± 10%
13	IC43150	JDIcon with cover screw Ø 4.3 L 15	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 15 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.51 g ± 10%
14	IC50060	JDIcon with cover screw Ø 5.0 L 6	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 6 mm 0.00/+0.010 mm Mass: 0.26 g ± 10%
15	IC50080	JDIcon with cover screw Ø 5.0 L 8	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 8 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.38 g ± 10%
16	IC50010	JDIcon with cover screw Ø 5.0 L 10	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length 10 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.47 g ± 10%
17	IC50115	JDIcon with cover screw Ø 5.0 L 11.5	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 11.5 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.48 g ± 10%
18	IC50130	JDIcon with cover screw Ø 5.0 L 13	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 13 mm -0.20/-0.40 mm

			Mass: 0.61 r ± 10%
19	IC50150	JDIcon with cover screw Ø 5.0 L 15	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 15 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.71 r ± 10%
20	IC39080:	JDIcon F with cover screw Ø3.9 L8	Diameter: 3.95 mm 0.00/+ 0.05 mm Length: 8 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.21 r ± 10%
21	IC39100:	JDIcon F with cover screw Ø3.9 L10	Diameter: 3.95 mm 0.00/+ 0.05 mm Length: 10 mm -0.40 /-0.20 mm Mass: 0.26 r ± 10%
22	IC39115:	JDIcon F with cover screw Ø3.9 L11.5	Diameter: 3.95 mm 0.00/+0.05 mm Length: 11.5 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.30 r ± 10%
23	IC39130:	JDIcon F with cover screw Ø3.9 L13	Diameter: 3.95 mm 0.00/+0.05 mm Length: 13 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.34 r ± 10%
24	IC39150:	JDIcon F with cover screw Ø3.9 L15	Diameter: 3.95 mm 0.00/+0.05 mm Length: 15 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.40 r ± 10%
25	IC39180:	JDIcon F with cover screw Ø3.9 L18	Diameter: 3.95 mm 0.00/+0.05 mm Length: 18 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.55 r ± 10%
26	IC39200:	JDIcon F with cover screw Ø3.9 L20	Diameter: 3.95 mm 0.00/+0.05 mm Length: 20 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.60 r ± 10%
27	IC43060:	JDIcon F with cover screw Ø4.3 L6	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 6 mm +0.10 / 0.00 mm Mass: 0.19 r ± 10%
28	IC43080:	JDIcon F with cover screw Ø4.3 L8	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 8 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.25 r ± 10%
29	IC43100:	JDIcon F with cover screw Ø4.3 L10	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 10 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.33 r ± 10%
30	IC43115:	JDIcon F with cover screw Ø4.3 L11.5	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 11.5 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.38 r ± 10%
31	IC43130:	JDIcon F with cover screw Ø4.3 L13	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 13 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.44 r ± 10%
32	IC43150:	JDIcon F with cover screw Ø4.3 L15	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 15 mm -0.40/-0.20 mm Mass: 0.51 r ± 10%
33	IC50060:	JDIcon F with cover screw Ø5.0 L6	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 6 mm 0.00/+0.010 mm Mass: 0.26 r ± 10%
34	IC50080:	JDIcon F with cover screw Ø5.0 L8	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 8 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.38 r ± 10%
35	IC50010:	JDIcon F with cover screw Ø5.0 L10	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length 10 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.47 r ± 10%
36	IC50115:	JDIcon F with cover screw Ø5.0 L11.5	Diameter: 5.0 mm 0.000/-0.02 mm Length: 11.5 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.54 r ± 10%

37	IC50130:	JDIcon F with cover screw Ø5.0 L13	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 13 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.61 g ± 10%
38	IC50150:	JDIcon F with cover screw Ø5.0 L15	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 15 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.71 g ± 10%
39	IC27080	JDIcon Ultra.S with cover screw Ø2.75 L 8	Diameter: 2.75 mm 0.00/+0.05 mm Length: 8 mm -0.10/-0.30 mm Mass: 0.098 g ± 10%
40	IC27100	JDIcon Ultra.S with cover screw Ø2.75 L 10	Diameter: 2.75 mm 0.00/+0.05 mm Length: 10 mm -0.10/-0.30 mm Mass: 0.147 g ± 10%
41	IC27115	JDIcon Ultra.S with cover screw Ø2.75 L 11.5	Diameter: 2.75 mm 0.00/+0.05 mm Length: 11.5 mm -0.10/-0.30 mm Mass: 0.176 g ± 10%
42	IC27130	JDIcon Ultra.S with cover screw Ø 2.75 L 13	Diameter: 2.75 mm 0.000/+0.050 mm Length: 13 mm -0.10/-0.30 mm Mass: 0.209 g ± 10%
43	IC27150	JDIcon Ultra.S with cover screw Ø2.75 L 15	Diameter: 2.75 mm 0.000/+0.050 mm Length: 15 mm -0.10/-0.30 mm Mass: 0.229 g ± 10%
44	NA40200:	JDNasal with cover screw Ø 4.0 L 20	Diameter: 4.1 mm 0.000/+0.050 mm Length: 20 mm ± 0.100 mm Mass: 0.80 g ± 10%
45	NA40220:	JDNasal with cover screw Ø 4.0 L 22	Diameter: 4.1 mm 0.000/+0.050 mm Length: 22 mm ± 0.100 mm Mass: 0.90 g ± 10%
46	NA40240:	JDNasal with cover screw Ø 4.0 L 24	Diameter: 4.1 mm 0.000/+0.050 mm Length: 24 mm ± 0.100 mm Mass: 1.00 g ± 10%
47	NA40260:	JDNasal with cover screw Ø 4.0 L 26	Diameter: 4.1 mm 0.000/+0.050 mm Length: 26 mm ± 0.100 mm Mass: 1.1 g ± 10%
48	PT40130:	JDPterygo with cover screw Ø 4.0 L13	Diameter: 4.0 mm 0.00/+0.10 mm Length: 13 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.38 g ± 10%
49	PT40150:	JDPterygo with cover screw Ø 4.0 L15	Diameter: 4.0 mm 0.00/+0.10 mm Length: 15 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.43 g ± 10%
50	PT40180:	JDPterygo with cover screw Ø 4.0 L18	Diameter: 4.0 mm 0.00/+0.10 mm Length: 18 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.52 g ± 10%
51	PT40200:	JDPterygo with cover screw Ø 4.0 L20	Diameter: 4.0 mm 0.00/+0.10 mm Length: 20 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.60 g ± 10%
52	ZY43300:	JDZygoma with cover screw Ø 4.3 L30	Diameter: 4.3 mm ± 0.02 mm Length: 30 mm ± 0.1 mm Mass: 1.65 g ± 10%
53	ZY43350:	JDZygoma with cover screw Ø 4.3 L35	Diameter: 4.3 mm ± 0.020 mm Length: 35 mm ± 0.10 mm Mass: 1.98 g ± 10%
54	ZY43375:	JDZygoma with cover screw Ø 4.3 L37.5	Diameter: 4.3 mm ± 0.02 mm Length: 37.5 mm ± 0.1 mm Mass: 2.14 g ± 10%
55	ZY43400:	JDZygoma with cover screw Ø 4.3 L40	Diameter: 4.3 mm ± 0.02 mm

			Length: 40 mm $\pm$ 0.1 mm Mass: 2.30 g $\pm$ 10%
56	ZY43425:	JDZygoma with cover screw $\varnothing$ 4.3 L42.5	Diameter: 4.3 mm $\pm$ 0.02 mm Length: 42.5 mm $\pm$ 0.01 mm Mass: 2.47 g $\pm$ 10%
57	ZY43450:	JDZygoma with cover screw $\varnothing$ 4.3 L45	Diameter: 4.3 mm $\pm$ 0.02 mm Length: 45 mm $\pm$ 0.01 mm Mass: 2.63 g $\pm$ 10%
58	ZY43475:	JDZygoma with cover screw $\varnothing$ 4.3 L47.5	Diameter: 4.3 mm $\pm$ 0.02 mm Length: 47.5 mm $\pm$ 0.01 mm Mass: 2.79 g $\pm$ 10%
59	ZY43500:	JDZygoma with cover screw $\varnothing$ 4.3 L50	Diameter: 4.3 mm $\pm$ 0.02 mm Length: 50 mm $\pm$ 0.01 mm Mass: 2.96 g $\pm$ 10%
60	ZY43525:	JDZygoma with cover screw $\varnothing$ 4.3 L52.5	Diameter: 4.3 mm $\pm$ 0.02 mm Length: 52.5 mm $\pm$ 0.01 mm Mass: 3.12 g $\pm$ 10%
61	IC37080.	JDIcon Plus F with cover screw $\varnothing$ 3.7 L 8	Diameter: 3.76 mm 0.00/+0.05 mm Length: 8 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.19 g $\pm$ 10%
62	IC37100.	JDIcon Plus F with cover screw $\varnothing$ 3.7 L 10	Diameter: 3.76 mm 0.00/+0.05 mm Length: 10 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.24 g $\pm$ 10%
63	IC37115.	JDIcon Plus F with cover screw $\varnothing$ 3.7 L 11.5	Diameter: 3.76 mm 0.00/+0.05 mm Length: 11.5 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.26 g $\pm$ 10%
64	IC37130.	JDIcon Plus F with cover screw $\varnothing$ 3.7 L 13	Diameter: 3.76 mm 0.00/+0.05 mm Length: 13 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.32 g $\pm$ 10%
65	IC37150.	JDIcon Plus F with cover screw $\varnothing$ 3.7 L 15	Diameter: 3.76 mm 0.00/+0.05 mm Length: 15 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.37 g $\pm$ 10%
66	IC37180.	JDIcon Plus F with cover screw $\varnothing$ 3.7 L 18	Diameter: 3.74 mm 0.00/+0.05 mm Length: 18 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.48 g $\pm$ 10%
67	IC43060.	JDIcon Plus F with cover screw $\varnothing$ 4.3 L 6	Diameter: 4.1 mm 0.00/-0.02 mm Length: 6 mm 0.00/-0.10 mm Mass: 0.17 g $\pm$ 10%
68	IC43080.	JDIcon Plus F with cover screw $\varnothing$ 4.3 L 8	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 8 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.25 g $\pm$ 10%
69	IC43100.	JDIcon Plus F with cover screw $\varnothing$ 4.3 L 10	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 10 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.30 g $\pm$ 10%
70	IC43115.	JDIcon Plus F with cover screw $\varnothing$ 4.3 L 11.5	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 11.5 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.36 g $\pm$ 10%
71	IC43130.	JDIcon Plus F with cover screw $\varnothing$ 4.3 L 13	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 13 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.42 g $\pm$ 10%
72	IC43150.	JDIcon Plus F with cover screw $\varnothing$ 4.3 L 15	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 15 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.50 g $\pm$ 10%
73	IC43180.	JDIcon Plus F with cover screw $\varnothing$ 4.3 L 18	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 18 mm -0.20/-0.40 mm

			Mass: 0.60 г ± 10%
74	IC50060.	JDIcon Plus F with cover screw Ø 5.0 L 6	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 6 mm 0.00/-0.10 mm Mass: 0.29 г ± 10%
75	IC50080.	JDIcon Plus F with cover screw Ø 5.0 L 8	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 8 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.37 г ± 10%
76	IC50010.	JDIcon Plus F with cover screw Ø 5.0 L 10	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 10 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.46 г ± 10%
77	IC50115.	JDIcon Plus F with cover screw Ø 5.0 L 11.5	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 11.5 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.55 г ± 10%
78	IC50130.	JDIcon Plus F with cover screw Ø 5.0 L 13	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 13 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.60 г ± 10%
79	IC37080,	JDIcon Plus with cover screw Ø 3.7 L 8	Diameter: 3.76 mm +0.00/+0.05 mm Length: 8 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.19 г ± 10%
80	IC37100,	JDIcon Plus with cover screw Ø 3.7 L 10	Diameter: 3.76 mm 0.00/+0.05 mm Length: 10 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.24 г ± 10%
81	IC37115,	JDIcon Plus with cover screw Ø 3.7 L 11.5	Diameter: 3.76 mm 0.00/+0.05 mm Length: 11.5 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.26 г ± 10%
82	IC37130,	JDIcon Plus with cover screw Ø 3.7 L 13	Diameter: 3.76 mm 0.00/+0.05 mm Length: 13 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.32 г ± 10%
83	IC37150,	JDIcon Plus with cover screw Ø 3.7 L 15	Diameter: 3.76 mm 0.00/+0.05 mm Length: 15 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.37 г ± 10%
84	IC37180,	JDIcon Plus with cover screw Ø 3.7 L 18	Diameter: 3.74 mm 0.00/+0.05 mm Length: 18 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.48 г ± 10%
85	IC43060,	JDIcon Plus with cover screw Ø 4.3 L 6	Diameter: 4.1 mm 0.00/-0.02 mm Length: 6 mm 0.00/-0.10 mm Mass: 0.17 г ± 10%
86	IC43080,	JDIcon Plus with cover screw Ø 4.3 L 8	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 8 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.25 г ± 10%
87	IC43100,	JDIcon Plus with cover screw Ø 4.3 L 10	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 10 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.30 г ± 10%
88	IC43115,	JDIcon Plus with cover screw Ø 4.3 L 11.5	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 11.5 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.36 г ± 10%
89	IC43130,	JDIcon Plus with cover screw Ø 4.3 L 13	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 13 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.42 г ± 10%
90	IC43150,	JDIcon Plus with cover screw Ø 4.3 L 15	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 15 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.50 г ± 10%
91	IC43180,	JDIcon Plus with cover screw Ø 4.3 L 18	Diameter: 4.3 mm 0.00/-0.02 mm Length: 18 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.60 г ± 10%

92	IC50060,	JDIcon Plus with cover screw Ø 5.0 L 6	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 6 mm 0.00/-0.10 mm Mass: 0.29 g ± 10%
93	IC50080,	JDIcon Plus with cover screw Ø 5.0 L 8	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 8 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.37 g ± 10%
94	IC50010,	JDIcon Plus with cover screw Ø 5.0 L 10	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 10 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.46 g ± 10%
95	IC50115,	JDIcon Plus with cover screw Ø 5.0 L 11.5	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 11.5 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.55 g ± 10%
96	IC50130,	JDIcon Plus with cover screw Ø 5.0 L 13	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 13 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.60 g ± 10%
97	EV37080:	JDEvolution Plus with cover screw Ø3.7 L 8	Diameter: 3.76 mm 0.00/+0.05 mm Length: 8 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.164 g ± 10%
98	EV37100:	JDEvolution Plus with cover screw Ø3.7 L 10	Diameter: 3.76 mm 0.00/+0.05 mm Length: 10 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.210 g ± 10%
99	EV37115:	JDEvolution Plus with cover screw Ø3.7 L 11.5	Diameter: 3.76 mm 0.00/+0.05 mm Length: 11.5 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.251 g ± 10%
100	EV37130:	JDEvolution Plus with cover screw Ø3.7 L 13	Diameter: 3.76 mm 0.00/+0.05 mm Length: 13 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.296 g ± 10%
101	EV37150:	JDEvolution Plus with cover screw Ø3.7 L 15	Diameter: 3.76 mm 0.00/+0.05 mm Length: 15 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.350 g ± 10%
102	EV37180:	JDEvolution Plus with cover screw Ø3.7 L 18	Diameter: 3.76 mm 0.00/+0.05 mm Length: 18 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.481 g ± 10%
103	EV43060:	JDEvolution Plus with cover screw Ø4.3 L 6	Diameter: 4.3 mm 0/-0.02 mm Length: 6 mm 0/-0.1 mm Mass: 0.173 g ± 10%
104	EV43080:	JDEvolution Plus with cover screw Ø4.3 L 8	Diameter: 4.3 mm 0/-0.02 mm Length: 8 mm -0.2/-0.4 mm Mass: 0.241 g ± 10%
105	EV43100:	JDEvolution Plus with cover screw Ø4.3 L 10	Diameter: 4.3 mm 0/-0.02 mm Length: 10 mm -0.2/-0.4 mm Mass: 0.293g ± 10%
106	EV43115:	JDEvolution Plus with cover screw Ø4.3 L 11.5	Diameter: 4.3 mm 0/-0.02 mm Length: 11.5 mm -0.2/-0.4 mm Mass: 0.354 g ± 10%
107	EV43130:	JDEvolution Plus with cover screw Ø4.3 L 13	Diameter: 4.3 mm 0/-0.02 mm Length: 13 mm -0.2/-0.4 mm Mass: 0.411 g ± 10%
108	EV43150:	JDEvolution Plus with cover screw Ø4.3 L 15	Diameter: 4.3 mm 0.000/-0.020 mm Length: 15 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.481 g ± 10%
109	EV43180:	JDEvolution Plus with cover screw Ø4.3 L 18	Diameter: 4.3 mm 0/-0.02 mm Length: 18 mm -0.2/-0.4 mm Mass: 0.574 g ± 10%
110	EV50060:	JDEvolution Plus with cover screw Ø5.0 L 6	Diameter: 5 mm 0.00/-0.02 mm

			Length: 6 mm 0.00/-0.10 mm Mass: 0.235 g ± 10%
111	EV50080:	JDEvolution Plus with cover screw Ø5.0 L 8	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 8 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.290 g ± 10%
112	EV50100:	JDEvolution Plus with cover screw Ø5.0 L 10	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 10 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.418 g ± 10%
113	EV50115:	JDEvolution Plus with cover screw Ø5.0 L 11.5	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 11.5 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.481 g ± 10%
114	EV50130:	JDEvolution Plus with cover screw Ø5.0 L 13	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 13 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.583 g ± 10%
115	EV50150:	JDEvolution Plus with cover screw Ø5.0 L 15	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 15 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.695 g ± 10%
116	EV60060:	JDEvolution Plus with cover screw Ø6.0 L 6	Diameter: 6.0 mm 0/-0.02 mm Length: 6 mm -0/-0.1 mm Mass: 0.371 g ± 10%
117	EV60080:	JDEvolution Plus with cover screw Ø6.0 L 8	Diameter: 6.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 8 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.470 g ± 10%
118	EV60100:	JDEvolution Plus with cover screw Ø6.0 L 10	Diameter: 6.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 10 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.648 g ± 10%
119	EV60115:	JDEvolution Plus with cover screw Ø6.0 L 11.5	Diameter: 6.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 11.5 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.763 g ± 10%
120	EV60130:	JDEvolution Plus with cover screw Ø6.0 L 13	Diameter: 6.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 13 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 0.875 g ± 10%
121	EV60150:	JDEvolution Plus with cover screw Ø6.0 L 15	Diameter: 6.0 mm 0.00/-0.02 mm Length: 15 mm -0.20/-0.40 mm Mass: 1.055 g ± 10%
122	ICCA15C	Conical Abutment H 1.5 JDIcon	Diameter: 4.8 mm 0.000/+0.040 mm Height: 1.5 mm ± 0.05 mm Mass: 0.24 g ± 10%
123	ICCA30C	Conical Abutment H 3.0 JDIcon	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 3 mm ± 0.05 mm Mass: 0.35 g ± 10%
124	ICCA1725C	Conical Abutment angulated 17° H 2.5 JDIcon	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 2.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.17 g ± 10%
125	ICCA1735C	Conical Abutment angulated 17° H 3.5 JDIcon	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 3.5 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.27 g ± 10%
126	ICCA3025C	Conical Abutment angulated 30° H 2.5 JDIcon	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 2.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.17 g ± 10%
127	ICCA3035C	Conical Abutment angulated 30° H 3.5 JDIcon	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 3.5 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.19 g ± 10%
128	ICCA15C.	Conical Abutment H 1.5 JDIcon Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 1.5 mm ± 0.05 mm

			Mass: 0.50 g ± 10%
129	ICCA30C.	Conical Abutment H 3.0 JDIcon Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 3 mm ± 0.05 mm Mass: 0.35 g ± 10%
130	ICCA1725C.	Conical Abutment Angulated 17° H 2.5 JDIcon Plus	Diameter: 4.8 mm 0/+0.04 mm Height: 2.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.17 g ± 10%
131	ICCA1735C.	Conical Abutment Angulated 17° H 3.5 JDIcon Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 3.5 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.22 g ± 10%
132	ICCA3025C.	Conical Abutment Angulated 30° H 2.5 JDIcon Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 2.85 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.17 g ± 10%
133	ICCA3035C.	Conical Abutment Angulated 30° H 3.5 JDIcon Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 3.5 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.19 g ± 10%
134	EVNCA10C:	Conical Abutment Straight H 1.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 1.0 mm ± 0.05 mm Mass: 0,18 g ± 10%
135	EVNCA15C:	Conical Abutment H 1.5 JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 1.5 mm ± 0.05 mm Mass: 0,216 g ± 10%
136	EVNCA20C:	Conical Abutment Straight H 2.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 2.0 mm ± 0.05 mm Mass: 0,25 g ± 10%
137	EVNCA30C:	Conical Abutment H 3.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 3.0 mm ± 0.05 mm Mass: 0,312 g ± 10%
138	EVNCA40C:	Conical Abutment Straight H 4.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 4.0 mm ± 0.05 mm Mass: 0,37 g ± 10%
139	EVCA1725C:	Conical Abutment Angulated 17° H 2.5 JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 2.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0,170 g ± 10%
140	EVCA1735C:	Conical Abutment Angulated 17° H 3.5 JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0.000/+0.040 mm Height: 3.5 mm 0/-0.075 mm Mass: 0,219 g ± 10%
141	EVCA3025C:	Conical Abutment Angulated 30° H 2.5 JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0/+0.04 mm Height: 2.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0,165 g ± 10%
142	EVCA3035C:	Conical Abutment Angulated 30° H 3.5 JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 3.5 mm 0/-0.075 mm Mass: 0,190 g ± 10%
143	EVCA4545C:	Conical Abutment Angulated 45° H 4.5 JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 4.2 mm 0/-0.075 mm Mass 0,29 g ± 10%
144	EVCA6050C:	Conical Abutment Angulated 60° H 5.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm -0/+0.04 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Mass 0,35 g ± 10%
145	EVNCA15TSC:	Conical Abutment Tissue Straight H 1.5 JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 1.5 mm ± 0.05 mm Mass: 0,19 g ± 10%
146	EVNCA30TSC:	Conical Abutment Tissue Straight H 3.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 3.0 mm ± 0.05 mm Mass: 0,26 g ± 10%

147	EVNCA40TSC:	Conical Abutment Tissue Straight H 4.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 4.0 mm $\pm$ 0.05 mm Mass: 0,32 g $\pm$ 10%
148	EVNCA50TSC:	Conical Abutment Tissue Straight H 5.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Height: 5.0 mm $\pm$ 0.05 mm Mass: 0,37 g $\pm$ 10%
149	ICTAEC	Temporary Abutment engaging JDIcon	Diameter: 4.8 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0,32 g $\pm$ 10%
150	ICTANEC	Temporary Abutment non engaging JDIcon	Diameter: 4.8 mm 0/-0.075 mm Height: 1.8 mm 0/-0.060 mm Mass: 0,29 g $\pm$ 10%
151	ICTANEWC	Temporary Abutment Non Engaging for Welding JDIcon	Diameter: 5 mm 0/-0.075 mm Height: 1.8 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.490 g $\pm$ 10%
152	ISTAEC	Temporary abutment engaging JDIcon Ultra.S	Diameter: 3.3 mm -0.050/+0.000 mm Height: 1.6 mm 0/-0.060 mm Mass: 0,144 g $\pm$ 10%
153	ICOATANEC.	Temporary Abutment Non Engaging Octa Abutment JDIcon Plus	Diameter: 4 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.267 g $\pm$ 10%
154	EVTAEC:	Temporary Abutment Engaging JDEvolution Plus	Diameter: 4.25 mm 0/-0.075 mm Height: 1.975 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.273 g $\pm$ 10%
155	EVTANEC:	Temporary Abutment Non Engaging JDEvolution Plus	Diameter: 4.25 mm 0/-0.075 mm Height: 2.065 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.28 g $\pm$ 10%
156	EVTAETSC:	Temporary Abutment Tissue Engaging JDEvolution Plus	Diameter: 4.25 mm 0/-0.075 mm Height: 2.025 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.28 g $\pm$ 10%
157	EVTANETSC:	Temporary Abutment Tissue Non Engaging JDEvolution Plus	Diameter: 4.25 mm 0/-0.075 mm Height: 2.025 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.27 g $\pm$ 10%
158	ICSA4520C	Straight Abutment Ø 4.5 H 2.0 JDIcon	Diameter: 4.5 mm 0/-0.075 mm Height: 2.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.26 g $\pm$ 10%
159	ICSA4540C	Straight Abutment Ø 4.5 H 4.0 JDIcon	Diameter: 4.5 mm 0/-0.075 mm Height: 4.0 mm $\pm$ 0.02 mm Mass: 0.34 g $\pm$ 10%
160	ICSA5020C	Straight Abutment Ø 5.0 H 2.0 JDIcon	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Height: 2.0 mm $\pm$ 0.02 mm Mass: 0.31 g $\pm$ 10%
161	ICSA5040C	Straight Abutment Ø 5.0 H 4.0 JDIcon	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Height: 4.0 mm $\pm$ 0.02 mm Mass: 0.40 g $\pm$ 10%
162	ICSA6020C	Straight Abutment Ø 6.0 H 2.0 JDIcon	Diameter: 6.0 mm 0/-0.075 mm Height: 2.0 mm $\pm$ 0.02 mm Mass: 0.48 g $\pm$ 10%
163	ICSA6040C	Straight Abutment Ø 6.0 H 4.0 JDIcon	Diameter: 6.0 mm 0/-0.075 mm Height: 4.0 mm $\pm$ 0.2 mm Mass: 0.62 g $\pm$ 10%
164	ISSA4020C	Straight Abutment Ø 4.0 H 2.0 JDIcon Ultra.S	Diameter: 4.0 mm 0/-0.075 mm Height: 2.0 mm $\pm$ 0.02 mm Mass: 0.200 g $\pm$ 10%
165	ISSA4040C	Straight Abutment Ø 4.0 H 4.0 JDIcon Ultra.S	Diameter: 4.0 mm 0.000/-0.050 mm Height: 4.0 mm $\pm$ 0.02 mm

			Mass: 0.277 g $\pm$ 10%
166	ICSA4520C.	Straight Abutment Ø 4.5 H 2.0 JDIcon Plus	Diameter: 4.5 mm 0/-0.075 mm Height: 2.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.38 g $\pm$ 10%
167	ICSA4520NEC.	Straight Abutment Non Engaging Ø 4.5 H 2.0 JDIcon Plus	Diameter: 4.5 mm 0/-0.075 mm Height: 2.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.30 g $\pm$ 10%
168	ICSA4540C.	Straight Abutment Ø 4.5 H 4.0 JDIcon Plus	Diameter: 4.5 mm 0/-0.075 mm Height: 4.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.38 g $\pm$ 10%
169	ICSA4540NEC.	Straight Abutment Non Engaging Ø 4.5 H 4.0 JDIcon Plus	Diameter: 4.5 mm 0/-0.075 mm Height: 4.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.38 g $\pm$ 10%
170	ICSA5020C.	Straight Abutment Ø 5.0 H 2.0 JDIcon Plus	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Height: 2.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.32 g $\pm$ 10%
171	ICSA5020NEC.	Straight Abutment Non Engaging Ø 5.0 H 2.0 JDIcon Plus	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Height: 2.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.32 g $\pm$ 10%
172	ICSA5040C.	Straight Abutment Ø 5.0 H 4.0 JDIcon Plus	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Height: 4.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.47 g $\pm$ 10%
173	ICSA5040NEC.	Straight Abutment Non Engaging Ø 5.0 H 4.0 JDIcon Plus	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Height: 4.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.42 g $\pm$ 10%
174	ICSA6020C.	Straight Abutment Ø 6.0 H 2.0 JDIcon Plus	Diameter: 6.0 mm 0/-0.075 mm Height: 2.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.52 g $\pm$ 10%
175	ICSA6040C.	Straight Abutment Ø 6.0 H 4.0 JDIcon Plus	Diameter: 6.0 mm 0/-0.075 mm Height: 4.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.67 g $\pm$ 10%
176	ICEXA5520C.	Straight Abutment Extra Ø 5.5 H 2.0 JDIcon Plus	Diameter: 5.5 mm 0/-0.075 mm Height: 2.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.40 g $\pm$ 10%
177	ICEXA5540C.	Straight Abutment Extra Ø 5.5 H 4.0 JDIcon Plus	Diameter: 5.5 mm 0/-0.075 mm Height: 4.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.53 g $\pm$ 10%
178	EVNSA4520C:	Straight Abutment Ø 4.5 H 2.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.5 mm 0/-0.075 mm Height: 2.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.254 g $\pm$ 10%
179	EVNSA4540C:	Straight Abutment Ø 4.5 H 4.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.5 mm 0/-0.075 mm Height: 4.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.254 g $\pm$ 10%
180	EVNSA5020C:	Straight Abutment Ø 5.0 H 2.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Height: 2.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.307 g $\pm$ 10%
181	EVNSA5040C:	Straight Abutment Ø 5.0 H 4.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Height: 4.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.407 g $\pm$ 10%
182	EVNSA6020C:	Straight Abutment Ø 6.0 H 2.0 JDEvolution Plus	Diameter: 6.0 mm 0/-0.075 mm Height: 2.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.489 g $\pm$ 10%
183	EVNSA6040C:	Straight Abutment Ø 6.0 H 4.0 JDEvolution Plus	Diameter: 6.0 mm 0/-0.075 mm Height: 4.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.639 g $\pm$ 10%

184	EVNSA5020TSC :	Straight Abutment Tissue Ø 5.0 H 2.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Height: 2.05 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.28 g ± 10%
185	EVNSA5040TSC :	Straight Abutment Tissue Ø 5.0 H 4.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Height: 4.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.37 g ± 10%
186	ICEA15C	Anatomic Abutment H 1.5 JDIcon	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Height: 1.51 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.30 g ± 10%
187	ICEA30C	Anatomic Abutment H 3.0 JDIcon	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.37 g ± 10%
188	IC15A15C	Anatomic Abutment Angulated 15° H 1.5 JDIcon	Diameter: 5.5 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.42 g ± 10%
189	IC15A30C	Anatomic Abutment Angulated 15° H 3.0 JDIcon	Diameter: 5.5 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.51 g ± 10%
190	IC25A15C	Anatomic Abutment Angulated 25° H 1.5 JDIcon	Diameter: 5.5 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.44 g ± 10%
191	IC25A30C	Anatomic Abutment Angulated 25° H 3.0 JDIcon	Diameter: 5.5 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.54 g ± 10%
192	IC15A15C. Plus	Anatomic Abutment Angulated 15° H 1.5 JDIcon Plus	Diameter: 5 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.37 g ± 10%
193	IC15A30C. Plus	Anatomic Abutment Angulated 15° H 3.0 JDIcon Plus	Diameter: 5 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.45 g ± 10%
194	IC25A15C. Plus	Anatomic Abutment Angulated 25° H 1.5 JDIcon Plus	Diameter: 5 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.38 g ± 10%
195	IC25A30C. Plus	Anatomic Abutment Angulated 25° H 3.0 JDIcon Plus	Diameter: 5 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.46 g ± 10%
196	EVEA15:	Anatomic Abutment H 1.5 JDEvolution Plus	Diameter: 5 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.272 g ± 10%
197	EVEA30:	Anatomic Abutment H 3.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.371 g ± 10%
198	EV15A15:	Anatomic Abutment Angulated 15° H 1.5 JDEvolution Plus	Diameter: 5 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.364 g ± 10%
199	EV15A15N:	15° Angulated Anatomic Abutment Ø 4.5 H 1.5 JDEvolution Plus	Diameter: 4.6 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.364 g ± 10%
200	EV15A30:	Anatomic Abutment Angulated 15° H 3.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.450 g ± 10%
201	EV15A30N:	15° Angulated Anatomic Abutment Ø 4.5 H 3.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.6 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.450 g ± 10%

202	EV25A15:	Anatomic Abutment Angulated 25° H 1.5 JDEvolution Plus	Diameter: 5 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.378 g ± 10%
203	EV25A30:	Anatomic Abutment Angulated 25° H 3.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.465 g ± 10%
204	ICBA15	Ball Abutment H 1.5 JDIcon	Diameter: 3.7 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.20 g ± 10%
205	ICBA30	Ball Abutment H 3.0 JDIcon	Diameter: 3.7 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.20 g ± 10%
206	ICBA50	Ball Abutment H 5.0 JDIcon	Diameter: 3.7 mm 0/-0.075 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.20 g ± 10%
207	ISBA15	Ball Abutment H 1.5 JDIcon Ultra.S	Diameter: 2.7 mm 0.000/-0.050 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.11 g ± 10%
208	ISBA30	Ball Abutment H 3.0 JDIcon Ultra.S	Diameter: 2.7 mm 0.00/-0.05 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.14 g ± 10%
209	ISBA50	Ball Abutment H 5.0 JDIcon Ultra.S	Diameter: 2.7 mm 0.00/-0.05 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.20 g ± 10%
210	ICBA15.	Ball Abutment H 1.5 JDIcon Plus	Diameter: 4 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.18 g ± 10%
211	ICBA30.	Ball Abutment H 3.0 JDIcon Plus	Diameter: 4 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.24 g ± 10%
212	ICBA50.	Ball Abutment H 5.0 JDIcon Plus	Diameter: 4 mm 0/-0.075 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.33 g ± 10%
213	EVBA15:	Ball Abutment H 1.5 JDEvolution Plus	Diameter: 4 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.177 g ± 10%
214	EVBA30:	Ball Abutment H 3.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.177 g ± 10%
215	EVBA50:	Ball Abutment H 5.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4 mm 0/-0.075 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.364 g ± 10%
216	ICEMI15	Emi Abutment H 1.5 JDIcon	Diameter: 3.7 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.19 g ± 10%
217	ICEMI30	Emi Abutment H 3.0 JDIcon	Diameter: 3.7 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.19 g ± 10%
218	ICEMI50	Emi Abutment H 5.0 JDIcon	Diameter: 3.7 mm 0/-0.075 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.19 g ± 10%
219	ICEMI15.	Emi Abutment H 1.5 JDIcon Plus	Diameter: 3.7 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.16 g ± 10%
220	ICEMI30.	Emi Abutment H 3.0 JDIcon Plus	Diameter: 3.7 mm 0/-0.075 mm

			Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.22 g ± 10%
221	ICEMI50.	Emi Abutment H 5.0 JDIcon Plus	Diameter: 3.7 mm 0/-0.075 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.30 g ± 10%
222	EVEMI15:	Emi Abutment H 1.5 JDEvolution Plus	Diameter: 3.7 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.162 g ± 10%
223	EVEMI30:	Emi Abutment H 3.0 JDEvolution Plus	Diameter: 3.7 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.162 g ± 10%
224	EVEMI50:	Emi Abutment H 5.0 JDEvolution Plus	Diameter: 3.7 mm 0/-0.075 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.162 g ± 10%
225	ICGP40C	GP Abutment Ø 4.0 JDIcon	Diameter: 4.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.30 g ± 10%
226	ICGP50C	GP Abutment Ø 5.0 JDIcon	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.44 g ± 10%
227	ICGP60C	GP Abutment Ø 6.0 JDIcon	Diameter: 6.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.75 g ± 10%
228	ISGP32C	GP Abutment Ø 3.2 JDIcon Ultra.S	Diameter: 3.2 mm 0.000/-0.050 mm Mass: 0.191 g ± 10%
229	ISGP40C	GP Abutment Ø 4.0 JDIcon Ultra.S	Diameter: 4.0 mm 0.000/-0.050 mm Mass: 0.309 g ± 10%
230	IS15GPA40C	GP Abutment 15° Ø 4.0 JDIcon Ultra.S	Diameter: 4.0 mm -0.00/-0.05 mm Mass: 0.266 g ± 10%
231	ICGP40C.	GP Abutment Ø 4.0 JDIcon Plus	Diameter: 4.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.40 g ± 10%
232	ICGP50C.	GP Abutment Ø 5.0 JDIcon Plus	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.52 g ± 10%
233	ICGP60C.	GP Abutment Ø 6.0 JDIcon Plus	Diameter: 6.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.85 g ± 10%
234	EVGPA40EC:	GP Abutment Engaging Ø 4.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.28 g ± 10%
235	EVGPA40NEC:	GP Abutment Non Engaging Ø 4.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.0 mm ± 0.05 mm Mass: 0.259 g ± 10%
236	EVGPAEC:	GP Abutment Engaging Ø 5.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.9 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.448 g ± 10%
237	EVGPA50NEC:	GP Abutment Non Engaging Ø 5.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.9 mm ± 0.05 mm Mass: 0.42 g ± 10%
238	EVGPA60EC:	GP Abutment Engaging Ø 6.0 JDEvolution Plus	Diameter: 6.0 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.816 g ± 10%
239	EVCAGPAEC	GP Abutment Engaging for Conical Abutment JDEvolution	Diameter: 4.8 mm ± 0.02 mm Mass: 0.29 g ± 10%
240	EVCAGPANEC	GP Abutment Non Engaging for Conical Abutment JDEvolution	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Mass: 0.29 g ± 10%
241	EVCAGPAEC:	GP Abutment Engaging for Conical Abutment JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm ± 0.02 mm Mass: 0.29 g ± 10%
242	EVCAGPANEC:	GP Abutment Non Engaging for Conical Abutment JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Mass: 0.29 g ± 10%
243	ICOA15.	Octa Abutment H 1.5 JDIcon Plus	Diameter: 3.8 mm 0.00/-0.03 mm Height: 1.5 mm ± 0.05 mm Mass: 0.17 g ± 10%
244	ICOA30.	Octa Abutment H 3.0 JDIcon Plus	Diameter: 3.8 mm 0.00/-0.03 mm Height: 3.0 mm ± 0.05 mm

			Mass: 0.23 g $\pm$ 10%
245	ICOA40.	Octa Abutment H 4.0 JDIcon Plus	Diameter: 3.8 mm 0.00/-0.03 mm Height: 4.0 mm $\pm$ 0.05 mm Mass: 0.27 g $\pm$ 10%
246	EVRA15C:	Rapid Abutment with Healing Cap and Coping H 1.5 JDEvolution Plus	Diameter: 5 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.220 g $\pm$ 10%
247	EVRA30C:	Rapid Abutment with Healing Cap and Coping H 3.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.297 g $\pm$ 10%
248	EVRA15D:	Rapid Abutment w/o Healing Cap and Coping H 1.5 JDEvolution Plus	Diameter: 5 mm 0/-0.075 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.220 g $\pm$ 10%
249	EVRA30D:	Rapid Abutment w/o Healing Cap and Coping H 3.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5 mm 0/-0.075 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.297 g $\pm$ 10%
250	ICHA43	Healing Abutment Ø 4.0 H 3.0 JDIcon	Diameter: 4.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8.3 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.23 g $\pm$ 10%
251	ICHA45	Healing Abutment Ø 4.0 H 5.0 JDIcon	Diameter: 4.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 10.3 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.34 g $\pm$ 10%
252	ICHA47	Healing Abutment Ø 4.0 H 7.0 JDIcon	Diameter: 4.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 7.0 mm 0/-0.090 mm Total Length: 12.3 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.45 g $\pm$ 10%
253	ICHA53	Healing Abutment Ø 5.0 H 3.0 JDIcon	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8.3 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.27 g $\pm$ 10%
254	ICHA55	Healing Abutment Ø 5.0 H 5.0 JDIcon	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 10.3 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.43 g $\pm$ 10%
255	ICHA57	Healing Abutment Ø 5.0 H 7.0 JDIcon	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 7.0 mm 0/-0.090 mm Total Length: 12.3 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.59 g $\pm$ 10%
256	ICHA59	Healing Abutment Ø 5.0 H 9.0 JDIcon	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 9.0 mm 0/-0.090 mm Total Length: 14.3 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.76 g $\pm$ 10%
257	ICHA63	Healing Abutment Ø 6.0 H 3.0 JDIcon	Diameter: 6.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8.3 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.32 g $\pm$ 10%
258	ICHA65	Healing Abutment Ø 6.0 H 5.0 JDIcon	Diameter: 6.0 mm 0.000/-0.050 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 10.3 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.55 g $\pm$ 10%
259	ICHA67	Healing Abutment Ø 6.0 H 7.0 JDIcon	Diameter: 6.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 7.0 mm 0/-0.090 mm

			Total Length: 12.3 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.74 g ± 10%
260	ISHA323	Healing Abutment Ø 3.2 H 3.0 JDIcon Ultra.S	Diameter: 3.2 mm 0.000/-0.050 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 7.8 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.117 g ± 10%
261	ISHA325	Healing Abutment Ø 3.2 H 5.0 JDIcon Ultra.S	Diameter: 3.2 mm 0.000/-0.050 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 9.8 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.117 g ± 10%
262	ISHA327	Healing Abutment Ø 3.2 H 7.0 JDIcon Ultra.S	Diameter: 3.2 mm 0.000/-0.050 mm Height: 7.0 mm 0/-0.090 mm Total Length: 11.8 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.117 g ± 10%
263	ISHA403	Healing Abutment Ø 4.0 H 3.0 JDIcon Ultra.S	Diameter: 4.0 mm 0.000/-0.050 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 7.8 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.150 g ± 10%
264	ISHA405	Healing Abutment Ø 4.0 H 5.0 JDIcon Ultra.S	Diameter: 4.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 9.8 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.150 g ± 10%
265	ISHA407	Healing Abutment Ø 4.0 H 7.0 JDIcon Ultra.S	Diameter: 4.0 mm 0.000/-0.050 mm Height: 7.0 mm 0/-0.090 mm Total Length: 11.8 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.150 g ± 10%
266	ICHA43.	Healing Abutment Ø 4.0 H 3.0 JDIcon Plus	Diameter: 4.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 7.85 mm ± 0.05 mm Mass: 0.20 g ± 10%
267	ICHA45.	Healing Abutment Ø 4.0 H 5.0 JDIcon Plus	Diameter: 4.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 9.85 mm ± 0.05 mm Mass: 0.30 g ± 10%
268	ICHA47.	Healing Abutment Ø 4.0 H 7.0 JDIcon Plus	Diameter: 4.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 7.0 mm 0/-0.090 mm Total Length: 11.85 mm ± 0.05 mm Mass: 0.39 g ± 10%
269	ICHA53.	Healing Abutment Ø 5.0 H 3.0 JDIcon Plus	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 7.85 mm ± 0.05 mm Mass: 0.26 g ± 10%
270	ICHA55.	Healing Abutment Ø 5.0 H 5.0 JDIcon Plus	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 9.85 mm ± 0.05 mm Mass: 0.37 g ± 10%
271	ICHA57.	Healing Abutment Ø 5.0 H 7.0 JDIcon Plus	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 7.0 mm 0/-0.090 mm Total Length: 11.85 mm ± 0.05 mm Mass: 0.48 g ± 10%
272	ICHA63.	Healing Abutment Ø 6.0 H 3.0 JDIcon Plus	Diameter: 6.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 7.85 mm ± 0.05 mm Mass: 0.34 g ± 10%
273	ICHA65.	Healing Abutment Ø 6.0 H 5.0 JDIcon Plus	Diameter: 6.0 mm 0.00/-0.05 mm

			Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 9.85 mm $\pm$ 0.05 mm Mass: 0.46 g $\pm$ 10%
274	ICHA67.	Healing Abutment Ø 6.0 H 7.0 JDIcon Plus	Diameter: 6.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 7.0 mm 0/-0.090 mm Total Length: 11.85 mm $\pm$ 0.05 mm Mass: 0.59 g $\pm$ 10%
275	ICHA753.	Healing Abutment Ø 7.5 H 3.0 JDIcon Plus	Diameter: 6.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 7.0 mm 0/-0.090 mm Total Length: 7.85 mm $\pm$ 0.05 mm Mass: 0.45 g $\pm$ 10%
276	ICHA755.	Healing Abutment Ø 7.5 H 5.0 JDIcon Plus	Diameter: 7.5 mm 0.00/-0.05 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 9.85 mm $\pm$ 0.05 mm Mass: 0.63 g $\pm$ 10%
277	EVHA43:	Healing Abutment Ø 4.0 H 3.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.0 mm -0.05/-0.08 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.203 g $\pm$ 10%
278	EVHA45:	Healing Abutment Ø 4.0 H 5.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.0 mm -0.05/-0.08 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 10 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.308 g $\pm$ 10%
279	EVHA47:	Healing Abutment Ø 4.0 H 7.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.0 mm -0.05/-0.08 mm Height: 7.0 mm 0/-0.090 mm Total Length: 12 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.414 g $\pm$ 10%
280	EVHA53:	Healing Abutment Ø 5.0 H 3.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5.0 mm -0.05/-0.08 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.265 g $\pm$ 10%
281	EVHA55:	Healing Abutment Ø 5.0 H 5.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5.0 mm -0.05/-0.08 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 10 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.417 g $\pm$ 10%
282	EVHA57:	Healing Abutment Ø 5.0 H 7.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5.0 mm -0.05/-0.08 mm Height: 7.0 mm 0/-0.090 mm Total Length: 12 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.567 g $\pm$ 10%
283	EVHA59:	Healing Abutment Ø 5.0 H 9.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5.0 mm -0.05/-0.08 mm Height: 9.0 mm 0/-0.090 mm Total Length: 14 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.73 g $\pm$ 10%
284	EVHA63:	Healing Abutment Ø 6.0 H 3.0 JDEvolution Plus	Diameter: 6.0 mm -0.05/-0.08 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.336 g $\pm$ 10%
285	EVHA65:	Healing Abutment Ø 6.0 H 5.0 JDEvolution Plus	Diameter: 6.0 mm -0.05/-0.08 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 10 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.543 g $\pm$ 10%
286	EVHA67:	Healing Abutment Ø 6.0 H 7.0 JDEvolution Plus	Diameter: 6.0 mm -0.05/-0.08 mm Height: 7.0 mm 0/-0.090 mm Total Length: 12 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.750 g $\pm$ 10%

287	EVHA753:	Healing Abutment Ø 7.5 H 3.0 JDEvolution Plus	Diameter: 7.5 mm 0/-0.090 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8 mm ± 0.05 mm Mass: 0.45 g ± 10%
288	EVHA755:	Healing Abutment Ø 7.5 H 5.0 JDEvolution Plus	Diameter: 7.5 mm 0/-0.090 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 10 mm ± 0.050 mm Mass: 0.77 g ± 10%
289	EVHA54TS:	Healing Abutment Tissue Ø 5.0 H 4.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5.0 mm -0.08/-0.05 mm Height: 4.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 9 mm 0/-0.90 mm Mass: 0.30 g ± 10%
290	EVHA56TS:	Healing Abutment Tissue Ø 5.0 H 6.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5.0 mm -0.08/-0.05 mm Height: 6.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 11 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.41 g ± 10%
291	ICHA53B	Healing Abutment Bridge Ø 5.0 H 3.0 JDIcon	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8.3 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.28 g ± 10%
292	ICHA55B	Healing Abutment Bridge Ø 5.0 H 5.0 JDIcon	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 10.3 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.43 g ± 10%
293	ICHA57B	Healing Abutment Bridge Ø 5.0 H 7.0 JDIcon	Diameter: 5.0 mm 0.00/-0.05 mm Height: 7.0 mm 0/-0.090 mm Total Length: 12.3 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.57 g ± 10%
294	EVCAICOTEC	Conical Abutment Impression Coping Open Tray Engaging JDEvolution	Diameter (wide part): 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Total Length: 10.5 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.52 g ± 10%
295	EVCAICOTC	Conical Abutment Impression Coping Open Tray JDEvolution	Diameter (wide part): 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Total Length: 10.5 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.29 g ± 10%
296	EVCAICOTLC	Conical Abutment Impression Coping Open Tray Long JDEvolution	Diameter (wide part): 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Total Length: 12 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.51 g ± 10%
297	EVCAICCTC	Conical Abutment Impression Coping Closed Tray	Diameter (wide part): 4.8 mm 0.000/+0.040 mm Total Length: 8 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.29 g ± 10%
298	EVEMIIC	Emi Abutment Plastic Impression Coping	Diameter (wide part): 3.7 mm 0/-0.075 mm Total Length: 8.68 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.08 g ± 0.01 g
299	EVEMIICS	Emi Abutment Steel Impression Coping	Diameter (wide part): 4.58 mm 0/-0.075 mm Total Length: 5.55 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.23 g ± 0.01 g
300	ICICOT4C	Impression Coping Open Tray Ø 4.0 JDIcon	Diameter: 4.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 13.35 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.75 g ± 10%

301	ICICOT5C	Impression Coping Open Tray Ø 5.0 JDIcon	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 13.35 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.89 g ± 10%
302	ICICOT6C	Impression Coping Open Tray Ø 6.0 JDIcon	Diameter: 6.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 13.35 mm 0/-0.110 mm Mass: 1.08 g ± 10%
303	ICICOTNEC	Impression Coping Open Tray for Bridge JDIcon	Diameter: 3.9 mm 0/-0.075 mm Total Length: 11.5 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.78 g ± 10%
304	ICICCT4C	Impression Coping Closed Tray Ø 4.0 JDIcon	Diameter: 4.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 12.35 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.62 g ± 10%
305	ICICCT5C	Impression Coping Closed Tray Ø 5.0 JDIcon	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 12.35 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.86 g ± 10%
306	ICICCT6C	Impression Coping Closed Tray Ø 6.0 JDIcon	Diameter: 6.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 12.35 mm 0/-0.110 mm Mass: 1.00 g ± 10%
307	ISICOT32C	Impression Coping Open Tray Ø 3.2 JDIcon Ultra.S	Diameter: 3.2 mm -0.050/0.000 mm Total Length: 13.25 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.315 g ± 10%
308	ISICOT40C	Impression Coping Open Tray Ø 4.0 JDIcon Ultra.S	Diameter: 4.0 mm -0.050/0.000 mm Total Length: 13.25 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.417 g ± 10%
309	ISICCT32C	Impression Coping Closed Tray Ø 3.2 JDIcon Ultra.S	Diameter: 3.2 mm -0.050/0.000 mm Total Length: 12.25 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.30 g ± 10%
310	ISICCT40C	Impression Coping Closed Tray Ø 4.0 JDIcon Ultra.S	Diameter: 4.0 mm -0.050/0.000 mm Total Length: 12.25 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.22 g ± 10%
311	ICICOT4C.	Impression Coping Open Tray Ø 4.0 JDIcon Plus	Diameter: 4.0 mm -0.10/-0.20 mm Total Length: 14.4 mm ± 0.05 mm Mass: 0.343 g ± 10%
312	ICICOT5C.	Impression Coping Open Tray Ø 5.0 JDIcon Plus	Diameter: 5.0 mm -0.10/-0.20 mm Total Length: 14.4 mm ± 0.05 mm Mass: 0.50 g ± 10%
313	ICICOT6C.	Impression Coping Open Tray Ø 6.0 JDIcon Plus	Diameter: 6.0 mm -0.10/-0.20 mm Total Length: 14.4 mm ± 0.05 mm Mass: 0.75 g ± 10%
314	ICICCT4C.	Impression Coping Closed Tray Ø 4.0 JDIcon Plus	Diameter: 4.0 mm -0.10/-0.20 mm Total Length: 14.4 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.318 g ± 10%
315	ICICCT5C.	Impression Coping Closed Tray Ø 5.0 JDIcon Plus	Diameter: 5.0 mm -0.10/-0.20 mm Total Length: 14.4 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.481 g ± 10%
316	ICICCT6C.	Impression Coping Closed Tray Ø 6.0 JDIcon Plus	Diameter: 6.0 mm -0.10/-0.20 mm Total Length: 14.4 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.555 g ± 10%
317	ICICCT1C.	Impression Coping Closed Tray Direct Press Fit JDIcon Plus	Diameter: 4.9 mm ± 0.02 mm Total Length: 16.3 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.673 g ± 10%
318	ICOAICOTC.	Impression Coping Open Tray for Octa Abutment JDIcon Plus	Diameter: 4 mm -0.02/0.00 mm Total Length: 12 mm ± 0.05 mm Mass: 0.271 g ± 10%

319	EVICOT4C:	Impression Coping Open Tray Ø 4.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 12.475 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.480 g ± 10%
320	EVICOT5C:	Impression Coping Open Tray Ø 5.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 12.475 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.557 g ± 10%
321	EVICOT6C:	Impression Coping Open Tray Ø 6.0 JDEvolution Plus	Diameter: 6.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 12.475 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.700 g ± 10%
322	EVICOTNEC:	Impression Coping Open Tray Non Engaging JDEvolution Plus	Diameter: 3.9 mm 0/-0.075 mm Total Length: 11.55 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.43 g ± 10%
323	EVICCT4C:	Impression Coping Closed Tray Ø 4.0 JDEvolution Plus	Diameter: 4.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 12.275 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.388 g ± 10%
324	EVICCT5C:	Impression Coping Closed Tray Ø 5.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 12.275 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.470g ± 10%
325	EVICCT6C:	Impression Coping Closed Tray Ø 6.0 JDEvolution Plus	Diameter: 6.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 12.28 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.566 g ± 10%
326	EVICCT1C:	Impression Coping Closed Tray Direct Press Fit JDEvolution Plus	Diameter: 4.9 mm ± 0.020mm Total Length: 16.3 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.621 g ± 10%
327	EVCAICOTEC:	Impression Coping Open Tray for Conical Abutment JDEvolution Plus	Diameter (wide part): 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Total Length: 10.5 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.52 g ± 10%
328	EVCAICOTC:	Impression Coping Open Tray for Conical Abutment JDEvolution Plus	Diameter (wide part): 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Total Length: 10.5 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.29 g ± 10%
329	EVCAICOTLC:	Conical Abutment Impression Coping Open Tray Long JDEvolution Plus	Diameter (wide part): 4.8 mm 0.00/+0.04 mm Total Length: 12 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.51 g ± 10%
330	EVICOT5TSC:	Impression Coping Tissue Open Tray Ø 5.0 JDEvolution Plus	Diameter (wide part): 5.0 mm 0/-0.075 mm Total Length: 12.475 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.466 g ± 10%
331	EVCAITEC	Interface CAD CAM for Conical Abutment Engaging JDEvolution	Total Length: 7.5 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.17 g ± 10%
332	EVCAITC	Interface CAD CAM for Conical Abutment Non Engaging JDEvolution	Total Length: 7.3 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.16 g ± 10%
333	EVCATIBC	Interface CAD CAM Non Engaging for Conical H 5.0 Abutment JDEvolution	Total Length: 5 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.10 g ± 10%
334	ICOAITC.	Interface CAD CAM Octa Abutment JDIcon Plus	Total Length: 7.3 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.15 g ± 10%

335	EVCAITEC:	Interface CAD CAM Engaging for Conical Abutment JDEvolution Plus	Total Length: 7.5 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.17 g $\pm$ 10%
336	EVCAITC:	Interface CAD CAM Non Engaging for Conical Abutment JDEvolution Plus	Total Length: 7.3 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.16 g $\pm$ 10%
337	EVCATIBC:	Interface CAD CAM Non Engaging for Conical H 5.0 Abutment JDEvolution Plus	Total Length: 5 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.10 g $\pm$ 10%
338	ICTIBC	TiBase Engaging JDIcon	Total Length: 7.8 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.125 g $\pm$ 10%
339	ICTIBNEC	TiBase Non Engaging JDIcon	Total Length: 5.95 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.105 g $\pm$ 10%
340	ICTIB15C	TiBase Engaging H 1.5 JDIcon	Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8.55 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.149 g $\pm$ 10%
341	ICTIB15NEC	TiBase Non Engaging H 1.5 JDIcon	Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Total Length: 6.7 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.134 g $\pm$ 10%
342	ICTIB30C	TiBase Engaging H 3.0 JDIcon	Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 10.05 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.204 g $\pm$ 10%
343	ICTIB30NEC	TiBase Non Engaging H 3.0 JDIcon	Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8.2 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.194 g $\pm$ 10%
344	ICTIBC.	TiBase Engaging JDIcon Plus	Height: 0.5 mm $\pm$ 10% Total Length: 7.8 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.15 g $\pm$ 10%
345	ICTIBNEC.	TiBase Non Engaging JDIcon Plus	Height: 0.5 mm $\pm$ 10% Total Length: 7.8 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.14 g $\pm$ 10%
346	ICTIB15C.	TiBase Engaging H 1.5 JDIcon Plus	Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8.5 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.16 g $\pm$ 10%
347	ICTIB15NEC.	TiBase Non Engaging H 1.5 JDIcon Plus	Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8.5 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.16 g $\pm$ 10%
348	ICTIB30C.	TiBase Engaging H 3.0 JDIcon Plus	Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 10.0 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.20 g $\pm$ 10%
349	ICTIB30NEC.	TiBase Non Engaging H 3.0 JDIcon Plus	Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 10.0 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.20 g $\pm$ 10%
350	ICTIBNC.	TiBase New Engaging JDIcon Plus	Height: 0.5 mm $\pm$ 10% Total Length: 10.8 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.21 g $\pm$ 10%
351	ICTIBNENC.	TiBase New Non Engaging JDIcon Plus	Height: 0.5 mm $\pm$ 10% Total Length: 10.8 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.21 g $\pm$ 10%
352	ICTIB15NC.	TiBase New Engaging H 1.5 JDIcon Plus	Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Total Length: 11.5 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.23 g $\pm$ 10%
353	ICTIB15NENC.	TiBase New Non Engaging H 1.5 JDIcon Plus	Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Total Length: 11.5 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.23 g $\pm$ 10%
354	ICTIB30NC.	TiBase New Engaging H 3.0 JDIcon Plus	Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 13 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.27 g $\pm$ 10%

355	ICTIB30NENC.	TiBase New Non Engaging H 3.0 JDIcon Plus	Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 13 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.27 g $\pm$ 10%
356	ICEXTIBC.	TiBase Extra Engaging JDIcon Plus	Height: 0.5 mm $\pm$ 10% Total Length: 7.8 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.15 g $\pm$ 10%
357	ICEXTIBNEC.	TiBase Extra Non Engaging JDIcon Plus	Height: 0.5 mm $\pm$ 10% Total Length: 7.8 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.15 g $\pm$ 10%
358	ICEXTIB15C.	TiBase Extra Engaging H 1.5 JDIcon Plus	Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8.5 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.17 g $\pm$ 10%
359	ICEXTIB15NEC.	TiBase Extra Non Engaging H 1.5 JDIcon Plus	Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8.5 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.17 g $\pm$ 10%
360	ICEXTIB30C.	TiBase Extra Engaging H 3.0 JDIcon Plus	Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 10 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.22 g $\pm$ 10%
361	ICEXTIB30NEC.	TiBase Extra Non Engaging H 3.0 JDIcon Plus	Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 10 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.21 g $\pm$ 10%
362	ICOATIBC.	TiBase Octa Abutment JDIcon Plus	Total Length: 5 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.12 g $\pm$ 10%
363	ISTIBC	TiBase JDIcon Ultra.S	Total Length: 8.05 mm 0/-0.090 mm Height: 0.5 mm $\pm$ 10% Mass: 0.112 g $\pm$ 10%
364	EVTIBC:	TiBase Engaging JDEvolution Plus	Height: 0.5 mm 0/-0.060 mm Total Length: 7.45 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.117 g $\pm$ 10%
365	EVTIBNEC:	TiBase Non Engaging JDEvolution Plus	Height: 0.5 mm 0/-0.060 mm Total Length: 5.95 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.10 g $\pm$ 10%
366	EVTIB15C:	TiBase Engaging H 1.5 JDEvolution Plus	Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8.48 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.150 g $\pm$ 10%
367	EVTIB15NEC:	TiBase Non Engaging H 1.5 JDEvolution Plus	Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Total Length: 7 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.135 g $\pm$ 10%
368	EVTIB30C:	TiBase Engaging H 3.0 JDEvolution Plus	Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 9.975 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.198 g $\pm$ 10%
369	EVTIB30NEC:	TiBase Non Engaging H 3.0 JDEvolution Plus	Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Total Length: 8.8 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.183 g $\pm$ 10%
370	EVTIBNC:	TiBase New Engaging JDEvolution Plus	Height: 0.5 mm $\pm$ 0.02 mm Total Length: 10.475 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.17 g $\pm$ 10%
371	EVTIBNENC:	TiBase New Non Engaging JDEvolution Plus	Height: 0.5 mm $\pm$ 0.02 mm Total Length: 9.3 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.16 g $\pm$ 10%
372	EVTIB15NC:	TiBase New Engaging H 1.5 JDEvolution Plus	Height: 1.5 mm $\pm$ 0.02 mm Total Length: 11.475 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.20 g $\pm$ 10%

373	EVTIB15NENC:	TiBase New Non Engaging H 1.5 JDEvolution Plus	Height: 1.5 mm $\pm$ 0.02 mm Total Length: 10.3 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.19 g $\pm$ 10%
374	EVTIB30NC:	TiBase New Engaging H 3.0 JDEvolution Plus	Total Length: 12.975 mm 0/-0.110 mm Height: 3.0 mm $\pm$ 0.02 mm Mass: 0.24 g $\pm$ 10%
375	EVTIB30NENC:	TiBase New Non Engaging H 3.0 JDEvolution Plus	Total Length: 11.8 mm 0/-0.110 mm Height: 3.0 mm $\pm$ 0.02 mm Mass: 0.23 g $\pm$ 10%
376	EVTIB15TSC:	TiBase Tissue Engaging H 1.5 JDEvolution Plus	Total Length: 8.48 mm 0/-0.090 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.14 g $\pm$ 10%
377	EVTIB15NETSC:	TiBase Tissue Non Engaging H 1.5 JDEvolution Plus	Total Length: 7.28 mm 0/-0.090 mm Height: 1.5 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.13 g $\pm$ 10%
378	EVTIB30TSC:	TiBase Tissue Engaging H 3.0 JDEvolution Plus	Total Length: 9.98 mm 0/-0.090 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.17 g $\pm$ 10%
379	EVTIB30NETSC:	TiBase Tissue Non Engaging H 3.0 JDEvolution Plus	Total Length: 8.78 mm 0/-0.090 mm Height: 3.0 mm 0/-0.060 mm Mass: 0.16 g $\pm$ 10%
380	ICCS	Cover Screw JDIcon	Total Length: 5.6 mm 0/-0.075 mm Hexagons width: 1.2 mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.09 g $\pm$ 10%
381	ISCS	Cover Screw JDIcon Ultra.S	Total Length: 5.2 mm 0/-0.075 mm Hexagons width: 1.2 mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.038 g $\pm$ 10%
382	ICCS.	Cover Screw JDIcon Plus	Total Length: 5.7 mm 0/-0.075 mm Hexagons width: 1.2 mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.09 g $\pm$ 10%
383	EVCS:	Cover Screw JDEvolution Plus	Total Length: 5.4 mm 0/-0.075 mm Hexagons width: 1.27 mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.076 g $\pm$ 10%
384	EVCS6:	Cover Screw Ø 6.0 JDEvolution Plus	Total Length: 5.4 mm 0/-0.075 mm Hexagons width: 1.27 mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.10 g $\pm$ 10%
385	ICS	Prosthetic Screw JDIcon	Total Length: 7.25 mm 0/-0.090 mm Hexagons width: 1.2mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.09 g $\pm$ 10%
386	ICSA	Prosthetic Screw Angulated JDIcon	Total Length: 7.25 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.084 g $\pm$ 10%
387	ICCASA	Conical Abutment Angulated Screw JDIcon	Total Length: 7.2 mm 0/-0.090 mm Hexagons width: 1.2mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.07 g $\pm$ 10%
388	ISS	Prosthetic Screw JDIcon Ultra.S	Total Length: 7.3 mm 0/-0.090 mm Hexagons width: 1.2mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.047 g $\pm$ 10%

389	ISSA	Prosthetic Screw Angulated JDIcon Ultra.S	Total Length: 7.3 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.055 g $\pm$ 10%
390	ICS.	Prosthetic Screw JDIcon Plus	Total Length: 8 mm 0/-0.090 mm Hexagons width: 1.2mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.067 g $\pm$ 10%
391	ICSA.	Prosthetic Screw Angulated JDIcon Plus	Total Length: 8 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.070 g $\pm$ 10%
392	ICCASA.	Conical Abutment Angulated Screw JDIcon Plus	Total Length: 6.7 mm 0/-0.090 mm Hexagons width: 1.2mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.053 g $\pm$ 10%
393	ICOAPS.	Prosthetic Screw Octa Abutment JDIcon Plus	Total Length: 4.8 mm 0/-0.075 mm Hexagons width: 1.2mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.054 g $\pm$ 10%
394	ICOAPSA.	Prosthetic Screw Angulated Octa Abutment JDIcon Plus	Total Length: 5.2 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.060 g $\pm$ 10%
395	EVS:	Prosthetic Screw JDEvolution Plus	Total Length: 7.775 mm 0/-0.090 mm Hexagons width: 1.27 mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.09 g $\pm$ 10%
396	EVSA:	Prosthetic Screw Angulated JDEvolution Plus	Total Length: 7.775 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.086 g $\pm$ 10%
397	EVCAPS:	Prosthetic Screw Conical Abutment JDEvolution Plus	Total Length: 3.8 mm 0/-0.075 mm Hexagons width: 1.27 mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.03 g $\pm$ 10%
398	EVCAPSL:	Prosthetic Screw Conical Abutment Long JDEvolution Plus	Total Length: 4.3 mm 0/-0.075 mm Hexagons width: 1.27 mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.03 g $\pm$ 10%
399	EVCASA:	Screw for Angulated Conical Abutment JDEvolution Plus	Total Length: 6.4 mm 0/-0.090 mm Hexagons width: 1.27 mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.056 g $\pm$ 10%
400	EVCASA60:	Screw for 60° Angulated Conical Abutment JDEvolution Plus	Total Length: 7.775 mm 0/-0.090 mm Hexagons width: 1.27 mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.08 g $\pm$ 10%
401	EVCAPS	Prosthetic Screw Conical Abutment JDEvolution	Total Length: 3.8 mm 0/-0.075 mm Hexagons width: 1.2 mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.03 g $\pm$ 10%
402	EVCASA	Screw for Angulated Conical Abutment JDEvolution	Total Length: 6.4 mm 0/-0.090 mm Hexagons width: 1.27 mm +0.02/0.00 mm Mass: 0.056 g $\pm$ 10%
403	EVCAPSA	Prosthetic Screw Angulated for Conical Abutment JDEvolution	Total Length: 3.8 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.03 g $\pm$ 10%
404	ICSBCEC	ScanBody Engaging JDIcon	Total Length: 14.35 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.386 g $\pm$ 10%
405	ISSBCEC	ScanBody Engaging JDIcon Ultra.S	Total Length: 14.25 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.325 g $\pm$ 10%
406	EVCASBCEC:	ScanBody Conical Abutment JDEvolution Plus	Total Length: 12 mm $\pm$ 0.01mm

			Mass: 0.78 r ± 10%
407	ICSBCEC.	ScanBody Engaging JDIcon Plus	Total Length: 14.4 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.38 r ± 10%
408	ICOASBCEC.	ScanBody Octa Abutment JDIcon Plus	Total Length: 12 mm ± 0.01 mm Mass: 0.43 r ± 10%
409	EVSBCCEC:	ScanBody Engaging JDEvolution Plus	Total Length: 14.3 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.31 r ± 10%
410	EVCASBCEC	ScanBody Conical Abutment JDEvolution	Total Length: 12 mm ± 0.01 mm Mass: 0.780 r ± 10%
411	ICOAHC.	Healing Cap Octa Abutment JDIcon Plus	Diameter: 4.0 mm 0.00/-0.05 mm Total Length: 3.75 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.078 r ± 10%
412	ICOAHC54.	Healing Cap Octa Abutment D 5.0 H 4.0 JDIcon Plus	Total Length: 4.0 mm 0/-0.075 mm Diameter: 5.3 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.24 r ± 10%
413	EVCAHC	Conical Abutment Healing Cap JDEvolution	Total Length: 4.25 mm 0/-0.075 mm Height: 3.5 mm ± 10% Diameter: 4.8 mm 0/-0.075 mm Mass: 0.23 r ± 10%
414	EVCAHCL	Conical Abutment Healing Cap H 6.0 JDEvolution	Diameter: 5.3 mm ± 0.02 mm Total Length: 6 mm ± 0.10 mm Mass: 0.065 r ± 10%
415	EVCAHCB	Conical Abutment Healing Cap Peek JDEvolution	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.05 mm Total Length: 4.5 mm 0/-0.075 mm Height: 3.5 mm ± 10% Mass: 0.08 r ± 10%
416	EVCAHC:	Healing Cap for Conical Abutment JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0/-0.075 mm Total Length: 4.25 mm 0/-0.075 mm Height: 3.5 mm ± 10% Mass: 0.23 r ± 10%
417	EVCAHCL:	Conical Abutment Healing Cap H 6.0 JDEvolution Plus	Diameter: 5.3 mm ± 0.02 mm Total Length: 6 mm ± 0.10 mm Mass: 0.065 r ± 10%
418	EVCAHCB:	Conical Abutment Healing Cap Peek JDEvolution Plus	Diameter: 4.8 mm 0.00/+0.05 mm Total Length: 4.5 mm 0/-0.075 mm Height: 3.5 mm ± 10% Mass: 0.07 r ± 10%
419	EVCATANEC:	Temporary Abutment Non Engaging Conical Abutment JDEvolution Plus	Total Length: 12 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.205 r ± 10%
420	EVCATANEWC:	Temporary Abutment Non Engaging Conical Abutment for Welding JDEvolution Plus	Total Length: 12 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.437 r ± 10%
421	EVCATANEWS C:	Temporary Abutment Non Engaging Conical Abutment Smooth for Welding JDEvolution Plus	Total Length: 13.3 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.558 r ± 10%
422	EVCATANEC	Temporary Abutment Non Engaging Conical Abutment JDEvolution	Total Length: 12 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.21 r ± 10%
423	EVCATANEWC	Temporary Abutment Non Engaging Conical Abutment for Welding JDEvolution	Total Length: 12 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.437 r ± 10%
424	ICATR	Abutment Retrieval Tool JDIcon	Total Length: 9.5 mm 0/-0.090 mm Mass: 0.10 r ± 10%
425	EVSCPC:	ScanPost JDEvolution Plus	Total Length: 12.48 mm 0/-0.110 mm Mass: 0.331 r ± 10%

17. Transportation.

Transportation of products must be carried out by all types of covered transport in compliance with the conditions and requirements established for this type of transport.

Temperature	20°±5°C
Atmospheric pressure	N/A
Relative humidity	N/A

18. Potential users.

Medical devices are intended for use by a dentist with experience in this procedure (dentists-restorers, surgeons).

Procedure conditions:

The product is intended for use in a medical institution (in dental clinics)

Patient Category:

Used for men and women over 18 years old.

19. Requirements for the maintenance and repair of medical devices.

Not applicable.

20. Information on the presence in a medical device of a medicinal product for medical use, materials of animal and (or) human origin.

Not applicable.

21. Requirements for the disposal or destruction of medical devices.

Medical devices after used are potentially hazardous medical waste and are class B medical waste — epidemiologically hazardous waste.

Disinfection and disposal of used medical device should be carried out in accordance with the requirements of sanitary regulations of SanPin 2.1.3684-21

Dispose in accordance with accepted medical practice and applicable local, state, and federal laws and regulations.

22. Interaction with other medical devices.

The following products are used during the implantation procedure

Included in the medical product:

- Abutments
- Healing Abutment
- Impression Coping
- Interface
- TiBase
- Screws
- Scan Body
- Caps

Not included in the medical product:

Information about compatible medical devices

Name of the medical device	Instruments for the formation of the bone bed	Instruments for removal/installation of implants and abutment suprastructures	Other compatible products
Implant	Drills with external irrigation: DRX 2.5 art. 4244, DRX3.0 art. 4306	CS Implant Driver -ITD2.5 S CS ITD2.5 L CS MITD2.5-CS	Key (Universal ratchet dynamometer)
JDEvolution Plus			

JDPTerygo	RC № RZN 2016/4608 from 19.01.2022. (Alpha-Bio)	RC № RZN 2022/17998 from 16.08.2022. (Alpha-Bio)	4572 URT RC № FSZ 2011/10261 from 12.04.2022. (Alpha-Bio)
JDNasal	Straight drill BD2.0 BD2.4 BD2.8 BD3.0 BD3.2 BD3.65 BD4.1 BD4.5 BD4.8 BD5.2 BD5.8 RC № RZN 2016/4796 from 12.04.2022. (Alpha-Bio)	Instrument for implant insertion IT2.5 SM CS IT2.5 LM CS RC № RZN 2021/14310 from 14.05.2021. (Alpha-Bio) Keys G-ITDS2.5 G-ITDM2.5 G-ITDL2.5 GITS2.5/1.25 GITL2.5/1.25 MITD2.5-IH RC № RZN 2016/9326 from 12.04.2022. (Alpha-Bio)	
JDZygoma	10. NobelZygoma 0° Twist Drill 2.9 mm. 11. NobelZygoma 0° Twist Drill 2.9 mm Short. 12. NobelZygoma 0° Twist Drill 3.5 mm. 13. NobelZygoma 0° Twist Drill 3.5 mm Short. 14. NobelZygoma 0° Twist Drill 4.0 mm. 15. NobelZygoma 0° Twist Drill 4.0 mm Short. RC № RZN 2021/14966 from 03.08.2021(Nobel Biocare) Branemark System (Bmk Syst) Zygoma Twist Drill dimensions:2,9 mm 2,9 mm Short; 3,5 mm; 3,5 mm Short Branemark System (Bmk Syst) Zygoma Pilot Drill dimensions:3,5 mm 3,5 mm Short Branemark System (Bmk Syst) Zygoma Round Bur RC № FSZ 2010/07929 from 06.09.2013 (Nobel Biocare)	CS Implant Driver -ITD2.5 S CS ITD2.5 L CS MITD2.5-CS RC № RZN 2022/17998 from 16.08.2022. (Alpha-Bio) Instrument for implant insertion IT2.5 SM CS IT2.5 LM CS RC № RZN 2021/14310 from 14.05.2021. (Alpha-Bio) Keys G-ITDS2.5 G-ITDM2.5 G-ITDL2.5 GITS2.5/1.25 GITL2.5/1.25 MITD2.5-IH RC № RZN 2016/9326 from 12.04.2022. (Alpha-Bio)	Key (Universal ratchet dynamometer) 4572 URT RC № FSZ 2011/10261 from 12.04.2022. (Alpha-Bio)
JDIcon/ JDIcon F	1. Surgical set NobelReplace Conical Connection (CC) PureSet, consisting of: - Drill Tapered RP 4,3 x 8 mm - 1 pc; - Drill Tapered RP 4,3 x 11,5 mm - 1 pc.; - Drill Extension Shaft - 1 pc.; RC № RZN 2019/9483 from 30.12.2019. (Nobel Biocare) Straight drill BD2.0 BD2.4 BD2.8 BD3.0 BD3.2 BD3.65 BD4.1 BD4.5 BD4.8 BD5.2 BD5.8 RC № RZN 2016/4796 from 12.04.2022. (Alpha-Bio)	1. Surgical set NobelReplace Conical Connection (CC) PureSet, consisting of: - Implant Driver Conical Connection (CC) RP 28 mm - 1 pc.; - Implant Driver Conical Connection (CC) RP 37 mm; - Direction Indicator Tapered RP - 1 pc.; RC № RZN 2019/9483 from 30.12.2019. (Nobel Biocare) 3. Surgical set NobelParallel Conical Coimection (CC) PureSet consisting of: - Implant Driver Conical Connection (CC) RP 28 mm - 1 pc.; - Implant Driver Conical Connection (CC) RP 37 mm - 1 pc.; RC № RZN 2019/9483 from 30.12.2019. (Nobel Biocare) 4. Surgical set NobelActive PureSet, consisting of:	3. Surgical set NobelParallel Conical Coimection (CC) PureSet consisting of: - Depth Probe 7-18 mm Z-shaped - 1 pc - NobelReplace Manual Torque WrenchSurgical - 1 pc. RC № RZN 2019/9483 from 30.12.2019. (Nobel Biocare) 4. Surgical set NobelActive PureSet, consisting of: - Depth Probe 7-18 mm Z-shaped - 1 pc - NobelActive Manual Torque WrenchSurgical - 1 pc. RC № RZN 2019/9483 from 30.12.2019. (Nobel Biocare) Key (Universal ratchet dynamometer) 4572 URT RC № FSZ 2011/10261 from

		- Implant Driver Conical Connection (CC) RP 28 mm - 1 pc.; - Implant Driver Conical Connection (CC) RP 37 mm - 1 pc.; RC № RZN 2019/9483 from 30.12.2019. (Nobel Biocare) Guided Implant Mount Bmk Syst RP Guided Implant Mount NobelActive RP 5.0 Guided Implant Mount NobelParallel CC RP 5.0 RC № RZN 2021/14742 from 09.07.2021 (Nobel Biocare)	12.04.2022. (Alpha-Bio)
JDIcon Plus /JDIcon Plus F	Straight drill BD2.0 BD2.4 BD2.8 BD3.0 BD3.2 BD3.65 BD4.1 BD4.5 BD4.8 BD5.2 BD5.8 RC № RZN 2016/4796 from 12.04.2022. (Alpha-Bio) Drills TANTDF2018 Ø2.5 SD2518S Ø2.8 SD2818S Ø3.3 TANSDF3318 Ø3.8 TANSDF3818 Ø4.3 TANSDF4318 Ø4.8 15 TANSDF4815 Surgical set KARIN3001 RC № RZN 2016/5077 from 28.11.2016 (Megagen)	Implant drivers TANHCL, TANREL, HCL 17, RCS17, RCL17 Surgical kit complete KARIN3001 RC № RZN 2016/5077 from 28.11.2016 (Megagen) Implant drivers TANRES, TANREL, TANHCL (SurgicalKitStandart) KARIN3003 RC № RZN 2016/5077 from 28.11.2016 (Megagen) Implant drivers TANHCS, TANHCU (BoneProfilerKit) KARBP3000 RC № RZN 2016/5077 from 28.11.2016 (Megagen) Implant drivers HCS17 (SurgicalKit) KAOIN3003 RC № RZN 2016/5077 from 28.11.2016 (Megagen)	Key (Universal ratchet dynamometer) 4572 URT RC № FSZ 2011/10261 from 12.04.2022. (Alpha-Bio) Screwdrivers, trepans, pins - Complete surgical set KARIN3001 RC № RZN 2016/5077 from 28.11.2016 (Megagen)
JDIcon Ultra.S	Straight drill BD2.0 BD2.4 BD2.8 RC № RZN 2016/4796 from 12.04.2022. (Alpha-Bio)	4. Surgical set NobelActive PureSet, consisting of: - Implant Driver Conical Connection (CC) 3.0 28 mm - 1 pc.; - Implant Driver Conical Connection (CC) 3.0 37 mm - 1 pc.; RC № RZN 2019/9483 from 30.12.2019. (Nobel Biocare) - Guided Implant Mount Bmk Syst RP - Guided Implant Mount NobelActive RP 5.0 - Guided Implant Mount NobelParallel CC RP 5.0 - Implant Mount 5.0 RC № RZN 2021/14742 from 09.07.2021. (Nobel Biocare)	4. Surgical set NobelActive PureSet, consisting of: - Depth Probe 7-18 mm Z-shaped - 1 pc - NobelActive Manual Torque WrenchSurgical - 1 pc. RC № RZN 2019/9483 from 30.12.2019. (Nobel Biocare) Key (Universal ratchet dynamometer) 4572 URT RC № FSZ 2011/10261 from 12.04.2022. (Alpha-Bio)

23. List of applicable standards.

MDD 93/42/EEC	Medical Device Directive
EN ISO 13485:2016	Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes
ANSI/AAMI/ISO 15223-1:2016	Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements
EN 1041:2013	Information supplied by the manufacturer of medical devices

EN ISO 14971:2012	Medical devices - Application of risk management to medical devices
ISO 14971:2019	Medical devices – Application on risk management to medical devices
Med Dev 2.12-1	Guidelines on a medical devices vigilance system
Med Dev 2.12-2	Guidelines on postmarketing clinical testings
Med Dev 2.7.1	Clinical evaluation: Guide for manufacturers and notified bodies
EN ISO 11137-1:2020	Sterilization of health care products — Radiation — Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices
EN ISO 11137-2: 2015	Sterilization of health care products – Radiation - Part 2. Establishing the sterilization dose
EN ISO 11137-3:2017	Sterilization of health care products - Radiation - Part 3: Guidance on dosimetric aspects of development, validation and routine control
EN 556-1: 2002	Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 1: Requirements for terminally sterilized medical devices
EN 556-2: 2015	Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be designated "STERILE" - Part 2: Requirements for aseptically processed medical devices
EN ISO 14644-1:2016	Cleanrooms and associated controlled environments — Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration
EN ISO 14644-2:2016	Cleanrooms and associated controlled environments - Part 2: Monitoring to provide evidence of cleanroom performance related to air cleanliness by particle concentration
EN ISO 14644-3: 2019	Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods
EN ISO 14698-1: 2004	Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control - Part 1: General principles and methods
EN ISO 14698-2: 2004	Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control - Part 2: Evaluation and interpretation of biocontamination data
EN ISO 10993-1:2010	Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process
EN ISO 11607-1: 2017	Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems
EN ISO 11607-2:2017	Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes
EN ISO 11737-1:2018	Sterilization of health care products — Microbiological methods — Part 1: Determination of a population of microorganisms on products
EN 62366-1:2015	Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
EN ISO 14801: 2017	Dentistry — Implants — Dynamic fatigue test for endosseous dental implants
EN 1642:2012	Dentistry - Medical devices for dentistry - Dental implants
EN ISO 17664:2018	Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices

24. The name and legal address of the manufacturer of medical devices and authorized representative of the manufacturer in RF.

Manufacturer

«J DENTAL CARE S.R.L.»

Via del Tirassegno 41/N 41122 Modena, Italy

AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN RUSSIAN FEDERATION:

Implant Service LLC

Rozhdestvenka street 5/7, building 2, 3rd floor. V K 4 office 261, Moscow Russia, 107031

Telephone: +79788671550

www.jdentalcare.ru

ДЖЕЙ ДЕНТАЛ КЕА
(J DENTAL CARE)

ДЖЕЙ ДЕНТАЛ КЕА ООО
(J DENTAL CARE S.R.L.)
Италия, Модена, 41122, Виа дель
Террасеньо 41/N
www.jdentalcare.com

Инструкция по применению
«Система дентальной имплантации J DENTAL CARE»

«Подтверждено»
ДЖЕЙ ДЕНТАЛ КЕА ООО
(J DENTAL CARE S.R.L.)

Генеральный директор
(должность)

Джакомо Гранди (Giacomo Grandi)
(ФИО)

Подпись

Штамп: ДЖЕЙ ДЕНТАЛ КЕА
(J DENTAL CARE)

Штамп: Торгово-промышленная, ремесленная и сельскохозяйственная палата Модена

Мы подтверждаем, что лицо, подписавшее документ, является должным образом уполномоченным представителем с правом подписи от имени Компании в отношении любых документов и актов, использующихся в торговле с иностранными государствами.

Генеральный секретарь или уполномоченный сотрудник

Манфреди Чинция /Подпись/

Дата: 12 октября 2022 года

APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)	
1. Страна:	ИТАЛИЯ
Данный официальный документ	
2. подписан	Манфреди Чинция
3. выступающим в качестве	Делегата
4. скреплен печатью/штампом	Торгово-промышленной, ремесленной и сельскохозяйственной палаты Модены
Удостоверен	
5. В г. Модена	6. 12 октября 2022
7. Префектурой Модены	
8. за № 1780	
9. Печать	10. Подпись
Печать: Префектура Модена	/Подпись/ Должностное лицо префектуры

1. Наименование медицинского изделия.

«Система дентальной имплантации J DENTAL CARE», в составе:

I. Имплантат дентальный – 1/6/10/12 или 20 шт./упаковке, в комплекте:

1. Имплантат одного наименования с винтом-заглушкой, во флаконе – 1 шт.
2. Паспорт имплантата – 1 шт.
3. Инструкция по применению (мультиязычная) — 1 шт.
4. Наклейка - 2 шт.
5. Вкладыш с предупреждением — 1 шт.

варианты исполнения:

1. Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой:

- IC39080 диаметр 3.9 мм, длина 8 мм;
IC39100 диаметр 3.9 мм, длина 10 мм;
IC39115 диаметр 3.9 мм, длина 11.5 мм;
IC39130 диаметр 3.9 мм, длина 13 мм;
IC39150 диаметр 3.9 мм, длина 15 мм;
IC39180 диаметр 3.9 мм, длина 18 мм;
IC39200 диаметр 3.9 мм, длина 20 мм;
IC43060 диаметр 4.3 мм, длина 6 мм;
IC43080 диаметр 4.3 мм, длина 8 мм;
IC43100 диаметр 4.3 мм, длина 10 мм;
IC43115 диаметр 4.3 мм, длина 11.5 мм;
IC43130 диаметр 4.3 мм, длина 13 мм;
IC43150 диаметр 4.3 мм, длина 15 мм;
IC50060 диаметр 5.0 мм, длина 6 мм;
IC50080 диаметр 5.0 мм, длина 8 мм;
IC50100 диаметр 5.0 мм, длина 10 мм;
IC50115 диаметр 5.0 мм, длина 11.5 мм;
IC50130 диаметр 5.0 мм, длина 13 мм;
IC50150 диаметр 5.0 мм, длина 15 мм.

2. Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой:

- IC39080: диаметр 3.9 мм, длина 8 мм;
IC39100: диаметр 3.9 мм, длина 10 мм;
IC39115: диаметр 3.9 мм, длина 11.5 мм;
IC39130: диаметр 3.9 мм, длина 13 мм;
IC39150: диаметр 3.9 мм, длина 15 мм;
IC39180: диаметр 3.9 мм, длина 18 мм;
IC39200: диаметр 3.9 мм, длина 20 мм;
IC43060: диаметр 4.3 мм, длина 6 мм;
IC43080: диаметр 4.3 мм, длина 8 мм;
IC43100: диаметр 4.3 мм, длина 10 мм;
IC43115: диаметр 4.3 мм, длина 11.5 мм;
IC43130: диаметр 4.3 мм, длина 13 мм;
IC43150: диаметр 4.3 мм, длина 15 мм;
IC50060: диаметр 5.0 мм, длина 6 мм;
IC50080: диаметр 5.0 мм, длина 8 мм;
IC50010: диаметр 5.0 мм, длина 10 мм;
IC50115: диаметр 5.0 мм, длина 11.5 мм;
IC50130: диаметр 5.0 мм, длина 13 мм;
IC50150: диаметр 5.0 мм, длина 15 мм.

3. Имплантат JDIcon Ultra.S с винтом-заглушкой:
IC27080 диаметр 2.75 мм, длина 8 мм;
IC27100 диаметр 2.75 мм, длина 10 мм;
IC27115 диаметр 2.75 мм, длина 11.5 мм;
IC27130 диаметр 2.75 мм, длина 13 мм;
IC27150 диаметр 2.75 мм, длина 15 мм.
4. Имплантат с полированной шейкой JDNasal с винтом-заглушкой:
NA40200: диаметр 4.0 мм, длина 20 мм;
NA40220: диаметр 4.0 мм, длина 22 мм;
NA40240: диаметр 4.0 мм, длина 24 мм;
NA40260: диаметр 4.0 мм, длина 26 мм;
5. Имплантат с полированной шейкой JDPterygo с винтом-заглушкой:
PT40130: диаметр 4.0 мм, длина 13 мм;
PT40150: диаметр 4.0 мм, длина 15 мм;
PT40180: диаметр 4.0 мм, длина 18 мм;
PT40200: диаметр 4.0 мм, длина 20 мм.
6. Имплантат JDZygoma с винтом-заглушкой:
ZY43300: диаметр 4.3 мм, длина 30 мм;
ZY43350: диаметр 4.3 мм, длина 35 мм;
ZY43375: диаметр 4.3 мм, длина 37.5 мм;
ZY43400: диаметр 4.3 мм, длина 40 мм;
ZY43425: диаметр 4.3 мм, длина 42.5 мм;
ZY43450: диаметр 4.3 мм, длина 45 мм;
ZY43475: диаметр 4.3 мм, длина 47.5 мм;
ZY43500: диаметр 4.3 мм, длина 50 мм;
ZY43525: диаметр 4.3 мм, длина 52.5 мм.
7. Имплантат JDIcon F Plus с винтом-заглушкой:
IC37080. диаметр 3.7 мм, длина 8 мм;
IC37100. диаметр 3.7 мм, длина 10 мм;
IC37115. диаметр 3.7 мм, длина 11.5 мм;
IC37130. диаметр 3.7 мм, длина 13 мм;
IC37150. диаметр 3.7 мм, длина 15 мм;
IC37180. диаметр 3.7 мм, длина 18 мм;
IC43060. диаметр 4.3 мм, длина 6 мм;
IC43080. диаметр 4.3 мм, длина 8 мм;
IC43100. диаметр 4.3 мм, длина 10 мм;
IC43115. диаметр 4.3 мм, длина 11.5 мм;
IC43130. диаметр 4.3 мм, длина 13 мм;
IC43150. диаметр 4.3 мм, длина 15 мм;
IC43180. диаметр 4.3 мм, длина 18 мм;
IC50060. диаметр 5.0 мм, длина 6 мм;
IC50080. диаметр 5.0 мм, длина 8 мм;
IC50010. диаметр 5.0 мм, длина 10 мм;
IC50115. диаметр 5.0 мм, длина 11.5 мм;
IC50130. диаметр 5.0 мм, длина 13 мм;
8. Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой:
IC37080, диаметр 3.7 мм, длина 8 мм;
IC37100, диаметр 3.7 мм, длина 10 мм;
IC37115, диаметр 3.7 мм, длина 11.5 мм;

IC37130, диаметр 3.7 мм, длина 13 мм;
IC37150, диаметр 3.7 мм, длина 15 мм;
IC37180, диаметр 3.7 мм, длина 18 мм;
IC43060, диаметр 4.3 мм, длина 6 мм;
IC43080, диаметр 4.3 мм, длина 8 мм;
IC43100, диаметр 4.3 мм, длина 10 мм;
IC43115, диаметр 4.3 мм, длина 11.5 мм;
IC43130, диаметр 4.3 мм, длина 13 мм;
IC43150, диаметр 4.3 мм, длина 15 мм;
IC43180, диаметр 4.3 мм, длина 18 мм;
IC50060, диаметр 5.0 мм, длина 6 мм;
IC50080, диаметр 5.0 мм, длина 8 мм;
IC50100, диаметр 5.0 мм, длина 10 мм;
IC50115, диаметр 5.0 мм, длина 11.5 мм;
IC50130, диаметр 5.0 мм, длина 13 мм;
9. Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой:
EV37080: диаметр 3.7 мм, длина 8 мм;
EV37100: диаметр 3.7 мм, длина 10 мм;
EV37115: диаметр 3.7 мм, длина 11.5 мм;
EV37130: диаметр 3.7 мм, длина 13 мм;
EV37150: диаметр 3.7 мм, длина 15 мм;
EV37180: диаметр 3.7 мм, длина 18 мм;
EV43060: диаметр 4.3 мм, длина 6 мм;
EV43080: диаметр 4.3 мм, длина 8 мм;
EV43100: диаметр 4.3 мм, длина 10 мм;
EV43115: диаметр 4.3 мм, длина 11.5 мм;
EV43130: диаметр 4.3 мм, длина 13 мм;
EV43150: диаметр 4.3 мм, длина 15 мм;
EV43180: диаметр 4.3 мм, длина 18 мм;
EV50060: диаметр 5.0 мм, длина 6 мм;
EV50080: диаметр 5.0 мм, длина 8 мм;
EV50100: диаметр 5.0 мм, длина 10 мм;
EV50115: диаметр 5.0 мм, длина 11.5 мм;
EV50130: диаметр 5.0 мм, длина 13 мм;
EV50150: диаметр 5.0 мм, длина 15 мм;
EV60060: диаметр 6.0 мм, длина 6 мм;
EV60080: диаметр 6.0 мм, длина 8 мм;
EV60100: диаметр 6.0 мм, длина 10 мм;
EV60115: диаметр 6.0 мм, длина 11.5 мм;
EV60130: диаметр 6.0 мм, длина 13 мм;
EV60150: диаметр 6.0 мм, длина 15 мм.
II. Абатмент – 1/20/30/40/50 или 60 шт./упаковке:
варианты исполнения:
1. Абатмент Мульти-юнит JDIcon:
ICCA15C - прямой, высота 1.5 мм;
ICCA30C - прямой, высота 3.0 мм;
ICCA1725C - угловой 17°, высота 2.5 мм;
ICCA1735C - угловой 17°, высота 3.5 мм;
ICCA3025C - угловой 30°, высота 2.5 мм;

ICCA3035C - угловой 30°, высота 3.5 мм.
2. Абатмент Мульти-юнит JDIcon Plus:
ICCA15C. - прямой, высота 1.5 мм;
ICCA30C. - прямой, высота 3.0 мм;
ICCA1725C. - угловой 17°, высота 2.5 мм;
ICCA1735C. - угловой 17°, высота 3.5 мм;
ICCA3025C. - угловой 30°, высота 2.5 мм;
ICCA3035C. - угловой 30°, высота 3.5 мм.
3. Абатмент Мульти-юнит JDEvolution Plus:
EVNCA10C: - прямой, высота 1.0 мм;
EVNCA15C: - прямой, высота 1.5 мм;
EVNCA20C: - прямой, высота 2.0 мм;
EVNCA30C: - прямой, высота 3.0 мм;
EVNCA40C: - прямой, высота 4.0 мм;
EVCA1725C: - угловой 17°, высота 2.5 мм;
EVCA1735C: - угловой 17°, высота 3.5 мм;
EVCA3025C: - угловой 30°, высота 2.5 мм;
EVCA3035C: - угловой 30°, высота 3.5 мм;
EVCA4545C: - угловой 45°, высота 4.5 мм;
EVCA6050C: - угловой 60°, высота 5.0 мм.
4. Абатмент Мульти-юнит Tissue JDEvolution Plus:
EVNCA15TSC: - прямой, высота 1.5 мм;
EVNCA30TSC: - прямой, высота 3.0 мм;
EVNCA40TSC: - прямой, высота 4.0 мм;
EVNCA50TSC: - прямой, высота 5.0 мм;
5. Абатмент временный JDIcon:
ICTAEC - JDIcon с захватом;
ICTANEC - JDIcon без захвата;
ICTANEWC - JDIcon без захвата для сварки
ISTAEC - JDIcon Ultra.S с захватом.
6. Абатмент временный Octa JDIcon Plus без захвата ICOATANEC.
7. Абатмент временный JDEvolution Plus:
EVTAE: - JDEvolution Plus с захватом;
EVTANEC: - JDEvolution Plus без захвата.
8. Абатмент временный Tissue JDEvolution Plus:
EVTAE: - Tissue JDEvolution Plus с захватом;
EVTANETSC: - Tissue JDEvolution Plus без захвата.
9. Абатмент прямой JDIcon :
ICSA4520C диаметр 4.5 мм, высота 2.0 мм;
ICSA4540C диаметр 4.5 мм, высота 4.0 мм;
ICSA5020C диаметр 5.0 мм, высота 2.0 мм;
ICSA5040C диаметр 5.0 мм, высота 4.0 мм;
ICSA6020C диаметр 6.0 мм, высота 2.0 мм;
ICSA6040C диаметр 6.0 мм, высота 4.0 мм.
10. Абатмент прямой JDIcon Ultra.S:
ISSA4020C диаметр 4.0 мм, высота 2.0 мм;
ISSA4040C диаметр 4.0 мм, высота 4.0 мм,
11. Абатмент прямой JDIcon Plus:
ICSA4520C. с захватом, диаметр 4.5 мм, высота 2.0 мм;

ICSA4520NEC. без захвата, диаметр 4.5 мм, высота 2.0 мм;
ICSA4540C. с захватом, диаметр 4.5 мм, высота 4.0 мм;
ICSA4540NEC. без захвата, диаметр 4.5 мм, высота 4.0 мм;
ICSA5020C. с захватом, диаметр 5.0 мм, высота 2.0 мм;
ICSA5020NEC. без захвата, диаметр 5.0 мм, высота 2.0 мм;
ICSA5040C. с захватом, диаметр 5.0 мм, высота 4.0 мм;
ICSA5040NEC. без захвата, диаметр 5.0 мм, высота 4.0 мм;
ICSA6020C. с захватом, диаметр 6.0 мм, высота 2.0 мм;
ICSA6040C. с захватом, диаметр 6.0 мм, высота 4.0 мм.
ICEXA5520C. Extra, диаметр 5.5 мм, высота 2.0 мм.
ICEXA5540C. Extra, диаметр 5.5 мм, высота 4.0 мм.
12. Абатмент прямой JDEvolution Plus:
EVNSA4520C: диаметр 4.5 мм, высота 2.0 мм;
EVNSA4540C: диаметр 4.5 мм, высота 4.0 мм;
EVNSA5020C: диаметр 5.0 мм, высота 2.0 мм;
EVNSA5040C: диаметр 5.0 мм, высота 4.0 мм;
EVNSA6020C: диаметр 6.0 мм, высота 2.0 мм;
EVNSA6040C: диаметр 6.0 мм, высота 4.0 мм.
13. Абатмент прямой Tissue JDEvolution Plus:
EVNSA5020TSC: диаметр 5.0 мм, высота 2.0 мм;
EVNSA5040TSC: диаметр 5.0 мм, высота 4.0 мм.
14. Абатмент анатомический JDIcon:
ICEA15C высота 1.5 мм;
ICEA30C высота 3.0 мм;
IC15A15C угловой 15°, высота 1.5 мм;
IC15A30C угловой 15°, высота 3.0 мм;
IC25A15C угловой 25°, высота 1.5 мм;
IC25A30C угловой 25°, высота 3.0 мм.
15. Абатмент анатомический JDIcon Plus:
IC15A15C. угловой 15°, высота 1.5 мм;
IC15A30C. угловой 15°, высота 3.0 мм;
IC25A15C. угловой 25°, высота 1.5 мм;
IC25A30C. угловой 25°, высота 3.0 мм.
16. Абатмент анатомический JDEvolution Plus:
EVEA15: высота 1.5 мм;
EVEA30: высота 3.0 мм;
EV15A15: угловой 15°, высота 1.5 мм;
EV15A15N: угловой 15°, диаметр 4.5 мм высота 1.5 мм;
EV15A30: угловой 15°, высота 3.0 мм;
EV15A30N: угловой 15°, диаметр 4.5 мм высота 3.0 мм;
EV25A15: угловой 25°, высота 1.5 мм;
EV25A30: угловой 25°, высота 3.0 мм.
17. Абатмент шаровидный JDIcon:
ICBA15 высота 1.5 мм;
ICBA30 высота 3.0 мм;
ICBA50 высота 5.0 мм.
18. Абатмент шаровидный JDIcon Ultra.S:
ISBA15 высота 1.5 мм;
ISBA30 высота 3.0 мм;

ISBA50 высота 5.0 мм.
19. Абатмент шаровидный JDIcon Plus:
ICBA15. высота 1.5 мм;
ICBA30. высота 3.0 мм;
ICBA50. высота 5.0 мм.
20. Абатмент шаровидный JDEvolution Plus:
EVBA15: высота 1.5 мм;
EVBA30: высота 3.0 мм;
EVBA50: высота 5.0 мм.
21. Абатмент Emi JDIcon:
ICEMI15 высота 1.5 мм;
ICEMI30 высота 3.0 мм;
ICEMI50 высота 5.0 мм.
22. Абатмент Emi JDIcon Plus:
ICEMI15. высота 1.5 мм;
ICEMI30. высота 3.0 мм;
ICEMI50. высота 5.0 мм.
23. Абатмент Emi JDEvolution Plus:
EVEMI15: высота 1.5 мм;
EVEMI30: высота 3.0 мм;
EVEMI50: высота 5.0 мм.
24. Абатмент GP JDIcon:
ICGP40C диаметр 4.0 мм;
ICGP50C диаметр 5.0 мм;
ICGP60C диаметр 6.0 мм.
25. Абатмент GP JDIcon Ultra.S:
ISGP32C диаметр 3.2 мм;
ISGP40C диаметр 4.0 мм;
IS15GPA40C угловой 15°, диаметр 4.0 мм.
26. Абатмент GP JDIcon Plus:
ICGP40C. диаметр 4.0 мм;
ICGP50C. диаметр 5.0 мм;
ICGP60C. диаметр 6.0 мм.
27. Абатмент GP JDEvolution Plus:
EVGPA40EC: с захватом, диаметр 4.0 мм;
EVGPA40NEC: без захвата, диаметр 4.0 мм;
EVGPAEC: с захватом, диаметр 5.0 мм;
EVGPA50NEC: без захвата, диаметр 5.0 мм;
EVGPA60EC: с захватом, диаметр 6.0 мм.
28. Абатмент GP для абатмента Мульти-юнит:
EVCAGPAEC с захватом JDEvolution;
EVCAGPANEC без захвата JDEvolution;
EVCAGPAEC: с захватом JDEvolution Plus;
EVCAGPANEC: без захвата JDEvolution Plus;
29. Абатмент Octa JDIcon Plus:
ICOA15. высота 1.5 мм;
ICOA30. высота 3.0 мм;
ICOA40. высота 4.0 мм.
30. Абатмент Rapid JDEvolution Plus:

EVRA15C: с заживляющим колпачком и трансфером, высота 1.5 мм;
EVRA30C: с заживляющим колпачком и трансфером, высота 3.0 мм;
EVRA15D: без заживляющего колпачка и трансфера, высота 1.5 мм;
EVRA30D: без заживляющего колпачка и трансфера, высота 3.0 мм.
III. Ортопедические компоненты – 1/20/30/40/50 или 60 шт./упаковке:
1. Формирователь десны, варианты исполнения:
1.1. Формирователь десны JDIcon:
ICHA43 диаметр 4.0 мм, высота 3.0 мм;
ICHA45 диаметр 4.0 мм, высота 5.0 мм;
ICHA47 диаметр 4.0 мм, высота 7.0 мм;
ICHA53 диаметр 5.0 мм, высота 3.0 мм;
ICHA55 диаметр 5.0 мм, высота 5.0 мм;
ICHA57 диаметр 5.0 мм, высота 7.0 мм;
ICHA59 диаметр 5.0 мм, высота 9.0 мм;
ICHA63 диаметр 6.0 мм, высота 3.0 мм;
ICHA65 диаметр 6.0 мм, высота 5.0 мм;
ICHA67 диаметр 6.0 мм, высота 7.0 мм.
1.2. Формирователь десны JDIcon Ultra.S:
ISHA323 диаметр 3.2 мм, высота 3.0 мм;
ISHA325 диаметр 3.2 мм, высота 5.0 мм;
ISHA327 диаметр 3.2 мм, высота 7.0 мм;
ISHA403 диаметр 4.0 мм, высота 3.0 мм;
ISHA405 диаметр 4.0 мм, высота 5.0 мм;
ISHA407 диаметр 4.0 мм, высота 7.0 мм.
1.3. Формирователь десны JDIcon Plus:
ICHA43. диаметр 4.0 мм, высота 3.0 мм;
ICHA45. диаметр 4.0 мм, высота 5.0 мм;
ICHA47. диаметр 4.0 мм, высота 7.0 мм;
ICHA53. диаметр 5.0 мм, высота 3.0 мм;
ICHA55. диаметр 5.0 мм, высота 5.0 мм;
ICHA57. диаметр 5.0 мм, высота 7.0 мм;
ICHA63. диаметр 6.0 мм, высота 3.0 мм;
ICHA65. диаметр 6.0 мм, высота 5.0 мм;
ICHA67. диаметр 6.0 мм, высота 7.0 мм;
ICHA753. диаметр 7.5 мм, высота 3.0 мм;
ICHA755. диаметр 7.5 мм, высота 5.0 мм;
1.4. Формирователь десны JDEvolution Plus:
EVNA43: диаметр 4.0 мм, высота 3.0 мм;
EVNA45: диаметр 4.0 мм, высота 5.0 мм;
EVNA47: диаметр 4.0 мм, высота 7.0 мм;
EVNA53: диаметр 5.0 мм, высота 3.0 мм;
EVNA55: диаметр 5.0 мм, высота 5.0 мм;
EVNA57: диаметр 5.0 мм, высота 7.0 мм;
EVNA59: диаметр 5.0 мм, высота 9.0 мм;
EVNA63: диаметр 6.0 мм, высота 3.0 мм;
EVNA65: диаметр 6.0 мм, высота 5.0 мм;
EVNA67: диаметр 6.0 мм, высота 7.0 мм;
EVNA753: диаметр 7.5 мм, высота 3.0 мм;
EVNA755: диаметр 7.5 мм, высота 5.0 мм.

1.5. Формирователь десны Tissue JDEvolution Plus:
EVHA54TS: диаметр 5.0 мм, высота 4.0 мм;
EVHA56TS: диаметр 5.0 мм, высота 6.0 мм.
1.6. Формирователь десны для мостовидного протеза JDIcon:
ICHA53B диаметр 5.0 мм, высота 3.0 мм;
ICHA55B диаметр 5.0 мм, высота 5.0 мм;
ICHA57B диаметр 5.0 мм, высота 7.0 мм,
2. Трансфер, варианты исполнения:
2.1. Трансфер для открытой ложки Мульти-юнит с захватом JDEvolution, EVCAICOTEC
2.2. Трансфер для открытой ложки Мульти-юнит JDEvolution, EVCAICOTC
2.3. Трансфер для открытой ложки длинный Мульти-юнит JDEvolution, EVCAICOTLC
2.4. Трансфер для закрытой ложки Мульти-юнит JDEvolution EVCAICCTC
2.5. Трансфер пластиковый для абатмента EmiJDEvolution EVEMIIC
2.6. Трансфер стальной для абатмента Emi JDEvolution EVEMIICS
2.7. Трансфер JDIcon для открытой ложки:
ICICOT4C диаметр 4.0 мм;
ICICOT5C диаметр 5.0 мм;
ICICOT6C диаметр 6.0 мм;
ICICOTNEC под мостовидные протезы.
2.8. Трансфер JDIcon для закрытой ложки:
ICICCT4C диаметр 4.0 мм;
ICICCT5C диаметр 5.0 мм;
ICICCT6C диаметр 6.0 мм.
2.9. Трансфер JDIcon Ultra.S для открытой ложки:
ISICOT32C диаметр 3.2 мм;
ISICOT40C диаметр 4.0 мм.
2.10. Трансфер JDIcon Ultra.S для закрытой ложки:
ISICCT32C диаметр 3.2 мм;
ISICCT40C диаметр 4.0 мм.
2.11. Трансфер JDIcon Plus для открытой ложки:
ICICOT4C. диаметр 4.0 мм;
ICICOT5C. диаметр 5.0 мм;
ICICOT6C. диаметр 6.0 мм.
2.12. Трансфер JDIcon Plus для закрытой ложки:
ICICCT4C. диаметр 4.0 мм;
ICICCT5C. диаметр 5.0 мм;
ICICCT6C. диаметр 6.0 мм.
2.13. Трансфер JDIcon Plus Direct Press Fit для закрытой ложки, ICICCT1C.
2.14. Трансфер для абатмента Octa JDIcon Plus для открытой ложки, ICOAICOTC.
2.15. Трансфер JDEvolution Plus для открытой ложки:
EVICOT4C: диаметр 4.0 мм;
EVICOT5C: диаметр 5.0 мм;
EVICOT6C: диаметр 6.0 мм;
EVICOTNEC: без захвата.
2.16. Трансфер JDEvolution Plus для закрытой ложки:
EVICCT4C: диаметр 4.0 мм;
EVICCT5C: диаметр 5.0 мм;
EVICCT6C: диаметр 6.0 мм.
2.17. Трансфер JDEvolution Plus Direct Press Fit для закрытой ложки, EVICCT1C:

2.18. Трансфер JDEvolution Plus Мульти-юнит для открытой ложки с захватом, EVCAICOTEC:
2.19. Трансфер JDEvolution Plus Мульти-юнит для открытой ложки, EVCAICOTC:
2.20. Трансфер JDEvolution Plus Мульти-юнит для открытой ложки длинный, EVCAICOTLC:
2.21. Трансфер Tissue JDEvolution Plus для открытой ложки, диаметр 5.0 мм, EVICOT5TSC:
3. Интерфейс, варианты исполнения:
3.1. Интерфейс для абатмента Мульти-юнит JDEvolution CAD CAM:
EVCAITEC с захватом, высота 7.5 мм,
EVCAITC без захвата, высота 7.5 мм,
EVCATIBC без захвата, высота 5 мм,
3.2. Интерфейс для абатмента Octa CAD CAM JDIcon Plus, ICOAITC.
3.3. Интерфейс для абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus CAD CAM:
EVCAITEC: с захватом, высота 7.5 мм;
EVCAITC: без захвата, высота 7.5 мм;
EVCATIBC: без захвата, высота 5 мм,
4. Титановое основание, варианты исполнения:
4.1. Титановое основание JDIcon:
ICTIBC с захватом, высота 0.5 мм,
ICTIBNEC без захвата, высота 0.5 мм;
ICTIB15C с захватом, высота 1.5 мм;
ICTIB15NEC без захвата, высота 1.5 мм;
ICTIB30C с захватом, высота 3.0 мм;
ICTIB30NEC без захвата, высота 3.0 мм.
4.2. Титановое основание JDIcon Plus:
ICTIBC. с захватом, высота 0.5 мм;
ICTIBNEC. без захвата, высота 0.5 мм;
ICTIB15C. с захватом, высота 1.5 мм;
ICTIB15NEC. без захвата, высота 1.5 мм;
ICTIB30C. с захватом, высота 3.0 мм;
ICTIB30NEC. без захвата, высота 3.0 мм;
ICTIBNC. длинное с захватом, высота 0.5 мм;
ICTIBNENC. длинное без захвата, высота 0.5 мм;
ICTIB15NC. длинное с захватом, высота 1.5 мм;
ICTIB15NENC. длинное без захвата, высота 1.5 мм;
ICTIB30NC. длинное с захватом, высота 3.0 мм;
ICTIB30NENC. длинное без захвата, высота 3.0 мм.
4.3. Титановое основание Extra JDIcon Plus:
ICEXTIBC. с захватом, высота 0.5 мм;
ICEXTIBNEC. без захвата, высота 0.5 мм;
ICEXTIB15C. с захватом, высота 1.5 мм,
ICEXTIB15NEC. без захвата, высота 1.5 мм,
ICEXTIB30C. с захватом, высота 3.0 мм,
ICEXTIB30NEC. без захвата, высота 3.0 мм,
4.4. Титановое основание абатмента Octa JDIcon Plus, ICOATIBC.
4.5. Титановое основание с захватом JDIcon Ultra.S, высота 0.5 мм, ISTIBC
4.6. Титановое основание JDEvolution Plus:
EVTIBC: с захватом, высота 0.5 мм;
EVTIBNEC: без захвата, высота 0.5 мм;
EVTIB15C: с захватом, высота 1.5 мм;

EVTIB15NEC: без захвата, высота 1.5 мм;
EVTIB30C: с захватом, высота 3.0 мм;
EVTIB30NEC: без захвата, высота 3.0 мм;
EVTIBNC: длинное с захватом, высота 0.5 мм;
EVTIBNENC: длинное без захвата, высота 0.5 мм;
EVTIB15NC: длинное с захватом, высота 1.5 мм;
EVTIB15NENC: длинное без захвата, высота 1.5 мм;
EVTIB30NC: длинное с захватом, высота 3.0 мм;
EVTIB30NENC: длинное без захвата, высота 3.0 мм.
4.7. Титановое основание Tissue JDEvolution Plus:
EVTIB15TSC: с захватом, высота 1.5 мм;
EVTIB15NETSC: без захвата, высота 1.5 мм;
EVTIB30TSC: с захватом, высота 3.0 мм;
EVTIB30NETSC: без захвата, высота 3.0 мм.
5. Винт-заглушка, варианты исполнения:
5.1. Винт-заглушка JDIcon, ICCS
5.2. Винт-заглушка JDIcon Ultra.S, ISCS
5.3. Винт-заглушка JDIcon Plus, ICCS.
5.4. Винт-заглушка JDEvolution Plus, EVCS:
5.5. Винт-заглушка JDEvolution Plus, диаметр 6.0 мм, EVCS6:
6. Винт ортопедический, варианты исполнения:
6.1. Винт ортопедический JDIcon, ICS
6.2. Винт ортопедический для угловой отвертки JDIcon, ICSA
6.3. Винт для углового абатмента Мульти-юнит JDIcon, ICCASA
6.4. Винт ортопедический JDIcon Ultra.S, ISS
6.5. Винт ортопедический для угловой отвертки JDIcon Ultra.S, ISSA
6.6. Винт ортопедический JDIcon Plus, ICS.
6.7. Винт ортопедический для угловой отвертки JDIcon Plus, ICSA.
6.8. Винт для углового абатмента Мульти-юнит JDIcon Plus, ICCASA.
6.9. Винт ортопедический для абатмента Octa JDIcon Plus, ICOAPS.
6.10. Винт ортопедический для углового абатмента Octa JDIcon Plus, ICOAPSA.
6.11. Винт ортопедический JDEvolution Plus, EVS:
6.12. Винт ортопедический для угловой отвертки JDEvolution Plus, EVSA:
6.13. Винт ортопедический для абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus, EVCAPS:
6.14. Винт ортопедический длинный для абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus, EVCAPSL:
6.15. Винт для углового абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus, EVCASA:
6.16. Винт для 60° углового абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus, EVCASA60:
6.17. Винт ортопедический для абатмента Мульти-юнит JDEvolution, EVCAPS
6.18. Винт для углового абатмента Мульти-юнит JDEvolution, EVCASA
6.19. Винт ортопедический для угловой отвертки Мульти-юнит JDEvolution, EVCAPSA
7. Скан-маркер, варианты исполнения:
7.1. Скан-маркер JDIcon, ICSBCEC
7.2. Скан-маркер JDIcon Ultra.S, ISSBCEC
7.3. Скан-маркер абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus, EVCASBCEC:
7.4. Скан-маркер JDIcon Plus с захватом, ICSBCEC.
7.5. Скан-маркер абатмента Octa JDIcon Plus, ICOASBCEC.
7.6. Скан-маркер JDEvolution Plus, EVSBCEC:
7.7. Скан-маркер абатмента Мульти-юнит JDEvolution, EVCASBCEC
8. Заживляющий колпачок, варианты исполнения:

8.1. Заживляющий колпачок абатмента Octa JDIcon Plus, ICOAHC.
8.2. Заживляющий колпачок абатмента Octa JDIcon Plus, диаметр 5.0 мм, высота 4.0 мм, ICOAHC54.
8.3. Заживляющий колпачок абатмента Мульти-юнит JDEvolution, высота 3.5 мм, EVCAHC
8.4. Заживляющий колпачок абатмента Мульти-юнит JDEvolution, высота 6 мм, EVCAHCL
8.5. Заживляющий колпачок PEEK абатмента Мульти-юнит JDEvolution, высота 3.5 мм, EVCAHCB
8.6. Заживляющий колпачок абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus, высота 3.5 мм, EVCAHC:
8.7. Заживляющий колпачок абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus, высота 6 мм, EVCAHCL:
8.8. Заживляющий колпачок PEEK абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus, высота 3.5 мм, EVCAHCB:
9. Временный колпачок, варианты исполнения:
9.1. Временный колпачок абатмента Мульти-юнит без захвата JDEvolution Plus, EVCATANEC:
9.2. Временный колпачок абатмента Мульти-юнит без захвата для сварки JDEvolution Plus, EVCATANEWC:
9.3. Временный колпачок абатмента Мульти-юнит без захвата гладкий для сварки JDEvolution Plus, EVCATANEWSC:
9.4. Временный колпачок абатмента Мульти-юнит без захвата JDEvolution, EVCATANEC
9.5. Временный колпачок абатмента Мульти-юнит без захвата для сварки JDEvolution, EVCATANEWC
10. Винт для извлечения абатмента, варианты исполнения:
10.1. Винт для извлечения абатмента JDIcon, ICATR
11. ScanPost JDEvolution Plus, EVSCPC:
IV. Эксплуатационная документация

2. Описание медицинского изделия.



Имплантация зубов является хирургической процедурой, которая обычно осуществляется в несколько этапов: производится разрез, откидывается слизисто-надкостничный лоскут или производится перфорирование мягких тканей без их отслаивания, формируется остеотомическое отверстие и в подготовленное ложе устанавливается имплантат.

Цель имплантатов J Dental Care - заменить отсутствующие зубы, создав стабильную основу для функциональных и эстетических реставраций зубов.

К имплантатам компании J Dental Care относятся дентальные имплантаты различных типов и размеров. Имплантаты изготавливаются из титанового сплава Ti Gr.4 по стандарту ASTM F67 и Ti Gr.5 по стандарту ASTM F136, их поверхность подвергается специальной обработке.

Имплантаты стерилизованы посредством гамма-облучения.

Линейка имплантатов J Dental Care включает в себя имплантаты: JDIcon, JDIcon F, JDIcon Ultra.S, JDNasal, JDZygoma, JDIcon F Plus, JDIcon Plus, JDEvolution Plus, JDPterygo, а также ортопедические компоненты: абатменты, формирователи десны, трансферы, интерфейсы, титановые основания, скан-маркеры, заживляющие колпачки и фиксирующие винты, необходимые для изготовления протеза.

Ортопедические компоненты системы J Dental Care, такие как: абатменты, формирователи десны, трансферы, интерфейсы, титановые основания, скан-маркеры, заживляющие колпачки и фиксирующие винты, обеспечивают поддержку и ретенцию при реставрации с винтовой или цементной фиксацией, на нижней и верхней челюсти

3. Назначение.

Система дентальной имплантации J DENTAL CARE, предназначена для использования во время хирургического размещения дентального имплантата в альвеолярной и/или базальной кости нижней или верхней челюсти для обеспечения поддержки и ретенции зубного протеза (например, моста, одного зуба, покрывного протеза).

4. Область применения.

Стоматология, челюстно-лицевая хирургия.

5. Показания к применению.

Имплантаты J DENTAL CARE предназначены для хирургической установки на верхней или нижней челюсти.

Система имплантатов J Dental Care состоит из зубных имплантатов и протезов. Система имплантатов J Dental Care (JDIcon, JDIcon F, JDIcon F Plus, JDIcon Plus, JDEvolution Plus, JDPterygo) предоставляет возможность протезирования при реставрации одиночных зубов, частично или полностью беззубых промежутков с несколькими отдельными зубами, с использованием отсроченной или немедленной нагрузки, или в качестве конечного или промежуточного упора для несъемных или съемных мостовидных протезов или для удержания съемных протезов. Протезы обеспечивают поддержку и ретенцию реставраций с винтовой или цементной фиксацией, на нижней и верхней челюсти. Система имплантатов J Dental Care предназначена для немедленного воздействия на отдельные зубы и / или на несколько зубов, когда достигается хорошая первичная стабильность при соответствующей окклюзионной нагрузке, чтобы восстановить жевательную функцию.

Зубные имплантаты JDIcon Ultra.S представляют собой средство для протезирования при реставрации отдельных зубов, а также в качестве конечного или промежуточного абатмента для несъемных или съемных мостовидных протезов или для удержания съемных протезов. JDIcon Ultra.S идеально подходит для областей с ограниченным пространством, таких как отсутствующие боковые резцы. Они предназначены для использования при реставрации одного зуба и в несъемных зубных протезах с имплантатами (мостовидных протезах) в области резцов и клыков. В области премоляров они предназначены для использования в несъемных частичных протезах на имплантатах (мостовидных протезах) у пациентов без парафункциональных привычек.

Зубные имплантаты JDNasal — это система имплантатов J Dental Care. JDNasal — это внутрикостные зубные имплантаты, предназначенные для хирургической установки на верхней челюсти. Имплантаты JDNasal состоят из зубных имплантатов и протезов.

Имплантаты JDNasal представляют собой средство для протезирования при реставрации отдельных зубов, частично или полностью беззубых промежутков с несколькими отдельными зубами, с использованием отложенной или немедленной нагрузки при достижении хорошей первичной стабильности, чтобы восстановить жевательную функцию пациента.

Имплантаты JDZygoma - внутрикостные зубные имплантаты, предназначенные для хирургической установки в скуловую кость челюсти. Имплантаты JDZygoma обеспечивают возможность протезирования в частично или полностью беззубых промежутках с использованием отсроченной или немедленной нагрузки, когда достигается хорошая первичная стабильность, чтобы восстановить жевательную функцию пациента при тяжелой атрофии верхней челюсти.

6. Инструкция по использованию.

ИМПЛАНТАТЫ: JDIcon, JDIcon F, JDIcon Ultra.S, JDIcon F Plus, JDIcon Plus, JDEvolution Plus, JDPterygo.

ОСМОТР И ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ

Перед началом лечения необходимо подробное обследование общего состояния здоровья пациента, а также тщательная оценка его/ее мотивации и ожиданий. Также необходимо учитывать такие ключевые факторы, как гигиена полости рта, тип прикуса и такие привычки, как курение.

Необходимо исключить наличие патологий мягких тканей и рассмотреть вопрос о том, идеально ли состояние костей пациента для установки имплантата.



Качество кости

Как правило, плотная кость придает имплантату хорошую первичную стабильность, в то время как мягкая кость требует дополнительной подготовки ложа имплантата, чтобы гарантировать адекватную первичную стабильность.

Высота кости

Количество доступной кости для установки имплантата зависит от анатомии.

Конструкция системы позволяет установить и стабилизировать имплантат всего на трех миллиметрах кости. Доступная кость может располагаться в самой апикальной части имплантата, как это происходит в лунках после удаления, или в шейной части имплантата, как в случае процедуры синуслифтинга.

Горизонтальная толщина кости

После установки имплантата толщина остаточной кости должна быть не менее одного миллиметра как в язычно-небном, так и в вестибулярном направлении. Специальное уменьшение коронковой части имплантата делает его идеальным для случаев с тонкими альвеолярными гребнями.

При наличии оптимального количества костей и мягких тканей вы можете использовать безлоскутную технику. Используйте лоскутную технику, когда необходимо исследовать альвеолярную кость и прилегающие анатомические структуры, а также при выполнении процедур по наращиванию гребня.

Важно: объективное обследование и рентгенологическое исследование являются важными элементами для определения анатомической формы, окклюзии, состояния пародонта и толщины кости. Радиологическое исследование «Cone Beam CT» рекомендуется для более точной оценки размеров и качества доступной кости.

ДИАМЕТРЫ И ДЛИНЫ ИМПЛАНТАТОВ

Имплантаты J Dental Care доступны в различных диаметрах и длинах, которые легко определяются с использованием цветовой кодировки, что позволяет упростить планирование лечения и клинические процедуры. Продукты J Dental Care отличаются уникальным протезным соединением, в котором платформа абатмента одинакова для имплантатов всех диаметров.

Доступные длины для каждого диаметра указаны в каталогах продукции.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ

Сверла, входящие в состав хирургического набора, должны использоваться с внешним орошением, чтобы предотвратить чрезмерный нагрев костной ткани. Если обеспечить орошение невозможно, сверление необходимо прервать.

Выполняйте сверление прокачивающими движениями внутрь и наружу, не прилагая чрезмерных усилий. При выполнении этого движения вам придется полностью вынуть сверло, чтобы проверить правильность орошения.


Сверла характеризуются наличием наклонных клиньев, обеспечивающих равномерное распределение охлаждающего физиологического раствора, а также сохранение стружки кортикальной кости, образовавшейся в процессе сверления после препарирования.

При уменьшении остроты сверла его необходимо вынуть из рукоятки для очистки. Продолжайте до тех пор, пока не доведете сверло на желаемую глубину.

Если есть соседние естественные зубы, мешающие головке углового наконечника, необходимо использовать удлинитель сверла. Желательно использовать хирургические двигатели с регулируемой скоростью и крутящим моментом.

Важно: начальная сверлильная головка прецизионного типа.


Головки дрельбора необходимо заменять примерно каждые 20 остеотомий по мере снижения режущей способности.

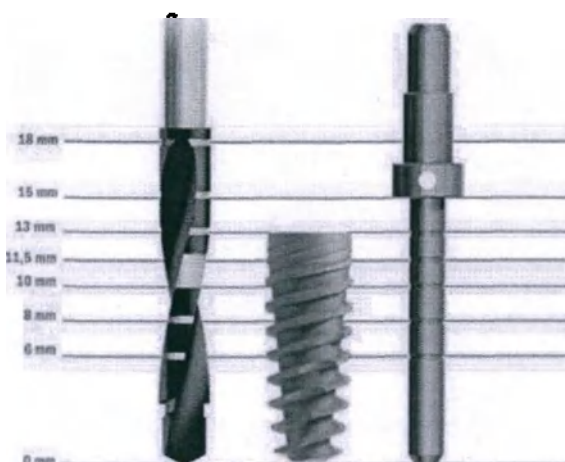

Рекомендуется придерживаться следующей последовательности сверления, чтобы обеспечить оптимальную первичную стабильность имплантата. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующей информацией в каталогах.

Процедура остановки сверла

Для безопасной и точной процедуры сверления установите ограничитель сверла на спиральное сверло.

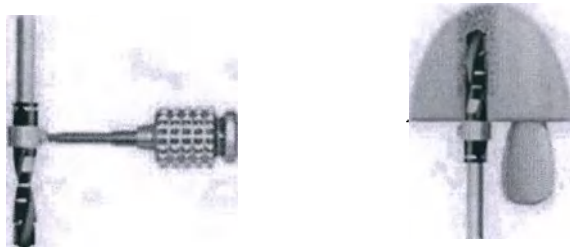


Возможность «инфра-препарирования костной ткани» (инфра-сверление) для получения большей первичной стабильности в мягкой кости.

В мягкой кости способность имплантатов к самонарезанию также позволяет устанавливать их с высокой степенью препарирования, учитывая, что уплотнение кости в апикальной области значительно увеличивает первичную стабильность имплантата. Если желательно использовать эту характеристику имплантата, необходимо просверлить кость на 2–4 мм меньше общей длины имплантата.

Вставьте имплантат в просверленную полость. Как только глубина сверления будет достигнута, имплантат будет иметь эффект остеотомии с учетом кости и повышения первичной стабильности до достижения оптимальной стабильности на желаемой глубине.

При неоптимальном качестве кости рекомендуется использовать инфра-сверление.

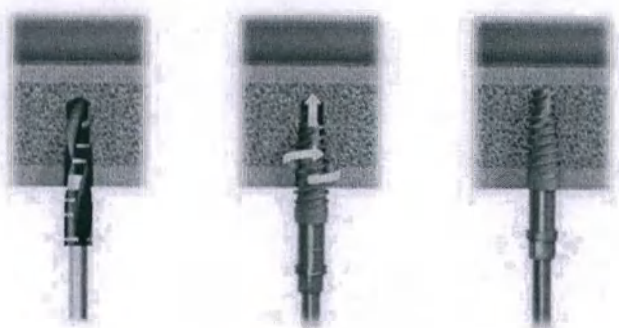


ПОШАГОВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА

На рисунках показана последовательность сверления для имплантата JDIcon® 4,3 x 13 мм в кости среднего качества. Протокол сверления для всех диаметров и качества кости представлен в каталогах к продукту.

Если для лучшей визуализации анатомии кости используется техника лоскутной хирургии, в качестве предварительной операции необходимо будет сделать разрез по всей толщине мягких тканей и приподнять край десны для доступа к костному гребню.

Если используется безлоскутный метод (минимально инвазивный), необходимо удалить ткань десны круглым скальпелем.

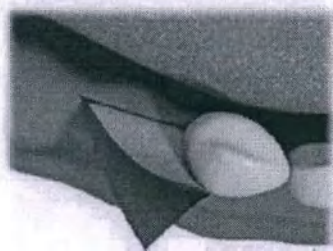


Начальное прецизионное сверление

Просверлите отверстие на гребне с помощью прецизионного сверла Ø 1,5 мм. Первоначальное прецизионное сверло имеет агрессивный угол резания, который эффективен даже в плотной кости.

Убедитесь, что вы не доходите прецизионным сверлом на глубину, превышающую глубину выбранного имплантата.

Максимальная скорость сверления прецизионным сверлом должна составлять 800 об./мин.

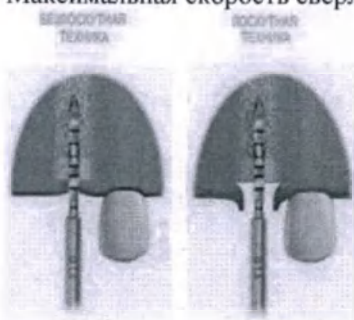

Примечание: при работе без лоскута всегда измеряйте толщину мягких тканей зондом для правильной подготовки к остеотомии до желаемой глубины.

Только для безлоскутной хирургии.

Перфорация мягких тканей

Вставьте направляющую для мукотома, соответствующую диаметру выбранного имплантата, в отверстие Ø 1,5. Подсоедините мукотом к угловому наконечнику и поместите его на направляющую. Надрежьте ткань до костного гребня.


Скорость не должна превышать 800 об./мин.



Используя обычное или маленькое хирургическое лезвие, выполните надрез перпендикулярно контуру мягких тканей, чтобы освободить их и удалить с вершины гребня.




Для продолжения подготовки к остеотомии используйте сверло Ø 2,0. Максимальная скорость должна быть 800 об./мин.

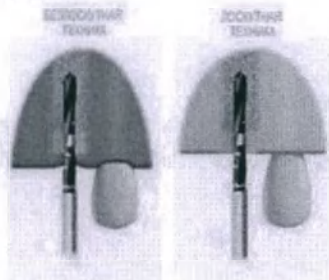

Индикатор направления


Вы можете всегда контролировать направление сверления с помощью индикатора направления. Вам может потребоваться радиологическое обследование, чтобы проверить параллельность с другими частями или соседними имплантатами. При необходимости откорректируйте направление сверления.

При установке нескольких имплантатов используйте одно и то же сверло для всех остеотомий, прежде чем переходить к следующему сверлу в последовательности.

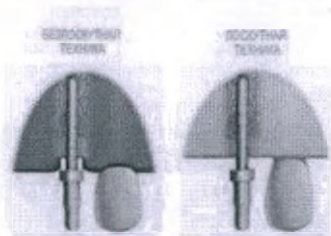


Диаметр сверла 2.4/2.8

Продолжайте препарировать ложе сверлом с диаметром 2.4/2.8. Максимальная скорость сверления 800 об./мин.

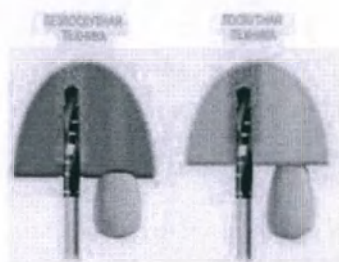


Диаметр сверла 3.2/3.6

Продолжайте препарировать ложе сверлом с диаметром 3.2/3.6. Максимальная скорость сверления 800 об./мин.

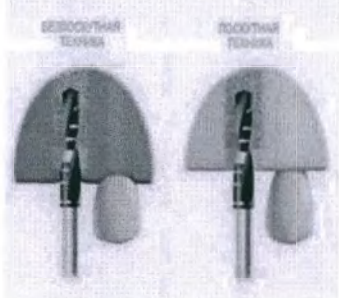

С помощью зонда контролируют глубину сверления и целостность корковых стенок в подготовленной полости.

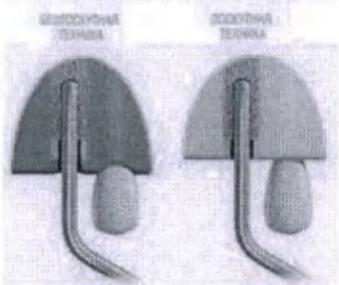

УСТАНОВКА ИМПЛАНТАТА

Напечатанная этикетка на внешней стороне упаковки содержит информацию о размерах имплантата: диаметр, связанный с цветовым кодом и длиной.

Откройте упаковку в стерильной среде и снимите пластиковую защиту, чтобы получить доступ к имплантату.

Окончательная установка имплантатов J Dental Care, в зависимости от клинической ситуации, может быть выполнена одним из следующих методов:

1. Динамометрический ключ



2. Хирургическая бормашина



3. Хирургическая отвертка



Важно: чрезмерное вращение имплантата может нарушить целостность внутреннего соединения и оказать чрезмерное давление на окружающую кость, что отрицательно повлияет на интеграцию кости. Крутящий момент при установке имплантата не может превышать 80 Н/см.

Использование динамометрического ключа.


Подсоедините имплантовод к динамометрическому ключу с установленным хирургическим адаптером.



Чтобы подсоединить имплантат, слегка надавите на драйвер.



Вставьте имплант в ранее выполненную остеотомию.

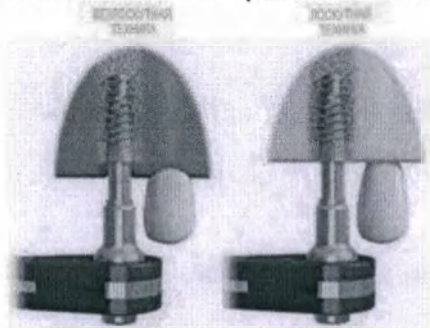

Использование хирургической бормашины.


Подсоедините имплантовод к наконечнику для бормашины.



Чтобы подсоединить имплант, слегка надавите на имплантовод.



Медленно вставьте имплантат в ранее выполненную остеотомию (25 оборотов в минуту).

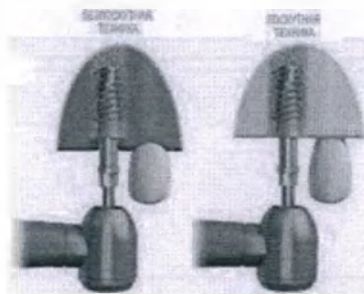

Использование хирургической отвертки


Также, можно использовать хирургическую отвертку для позиционирования имплантатов. Подсоедините имплантовод к хирургической отвертке.



Чтобы подсоединить имплант, слегка надавите на отвертку.



Вставьте имплантат в ранее выполненную остеотомию.

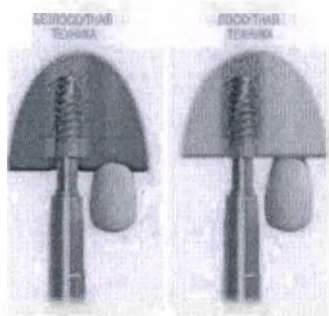

Окончательное позиционирование.

Соедините динамометрический ключ с имплантоводом, и установите имплантат на конечную глубину.

Для выполнения протоколов немедленной нагрузки имплантат должен быть установлен с окончательным усилием фиксации 35-45 Н/см, но ни в коем случае не превышающим 80 Н/см. Вывести отвертку можно, извлекая его вертикальным перемещением.



Для оптимального эстетического результата расположите имплантат на гребне кости или на 0,5–1 мм ниже.



Важно: избегайте чрезмерного усилия при установке имплантата с помощью динамометрического ключа, поскольку неправильное давление на кость может вызвать некроз и нарушить интеграцию с костью. Если вы наблюдаете чрезмерный крутящий момент (приблизительно 80 Н/см) на любом этапе установки, поверните имплантат против часовой стрелки на два или три оборота, чтобы воспользоваться его способностью к самонарезанию, и продолжите установку. Однако, если вы по-прежнему сталкиваетесь со слишком большим сопротивлением, вытащите имплант и выполните более обширную остеотомию.

Ориентация имплантата

Во время окончательной установки имплантата, когда желаемая глубина будет достигнута, необходимо совместить контрольные точки в отвертке с вестибулярной стенкой. Таким образом, шестиугольная форма внутреннего соединения позволяет оптимально позиционировать и ориентировать ортопедический абатмент.



На имплантоводе имеется отметка 3 мм для облегчения вертикального позиционирования платформы имплантата в соответствии с толщиной мягких тканей (применимо в безлоскутной хирургии).



JDZYGOMA

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

Для обеспечения предсказуемого результата операции необходимо выполнить тщательную предварительную оценку состояния пациента с адентией или с пораженными/не подлежащими восстановлению зубами.

При оценке данной группы пациентов, необходимо принять во внимание следующее:

Медицинский анамнез и основные жалобы пациента

На данном этапе отмечаются любые состояния пациента, которые могут повлиять на результат операции или на решение о рассмотрении пациента в качестве кандидата на операцию. При необходимости пациента направляют на медицинское обследование.

Стоматологический анамнез

На данном этапе выясняются ожидания пациента, его стоматологический анамнез и прошлые проблемы с зубами, например пародонтоз, подтвержденные пациентом или выявленные привычки, такие как скрежетание зубами и бруксизм.

Рентгенографическое исследование

Первичная рентгенологическая оценка может быть выполнена с помощью панорамной рентгенограммы (OPG).

По усмотрению лечащего врача может быть выполнена полная внутриротовая периапикальная серия снимков (FMX/FMS). Перед принятием окончательного решения рекомендуется провести медицинское КТ-исследование (CB).

Внутри- и внеротовой осмотр

Для пациентов, зубы которых не подлежат восстановлению, документируются свидетельства в пользу удаления таких зубов. Скрининговое обследование состояния мягких тканей полости рта имеет первостепенное значение. Также рекомендуется обследование височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).

Предоперационная оценка состояния верхнечелюстной пазухи

Трехмерное рентгенологическое исследование верхнечелюстной пазухи позволяет выявить/определить:

- Полипы в верхнечелюстной пазухе
- Толщину мембраны Шнайдера
- Потенциальные газожидкостные уровни
- Проходимость остиомеатального комплекса

Хорошее состояние верхнечелюстной пазухи очень важно для установки скуловых имплантатов JDZygoma.

Любая патология верхнечелюстной пазухи считается противопоказанием к установке скуловых имплантатов JDZygoma.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Выполните надрез

Сделайте надрез на беззубой части гребня верхней челюсти методом дистального вертикального послабляющего разреза.

Отогните полнослойный слизисто-надкостничный лоскут, чтобы обнажить боковую стенку верхней челюсти.

Обращайте внимание анатомические ориентиры

Обязательно обращайтесь внимание на расположение соседних артерий, вен и нервов в зоне операции. Повреждения этих анатомических структур могут привести к таким осложнениям, как травма глаза, обширное кровотечение и нервная дисфункция.

- 1 Задняя стенка верхнечелюстной пазухи
- 2 Скулово-верхнечелюстное возвышение
- 3 Подглазничное отверстие
- 4 Переднескуловая выемка

Выполните разрез до уровня подглазничного отверстия

Обнажите альвеолярный гребень, включая его небную сторону.

Аккуратно выполните разрез до уровня подглазничного отверстия. Определение местоположения подглазничного отверстия поможет с анатомической ориентацией.

Обнажите тело скуловой кости


Отогните лоскут вбок на уровне подглазничного нерва и обнажите тело скуловой кости.

Внимание: очень важно определить положение и защитить подглазничный нерв.

Установите ретрактор для визуализации верхней точки имплантата

Поместите ретрактор в переднескуловую выемку для облегчения визуализации предполагаемой верхней точки имплантата (обращая особое внимание на то, чтоб он не проник в нижнюю стенку глазницы).


Когда рассечение будет полностью выполнено, ориентиры 1–4 будут видны.

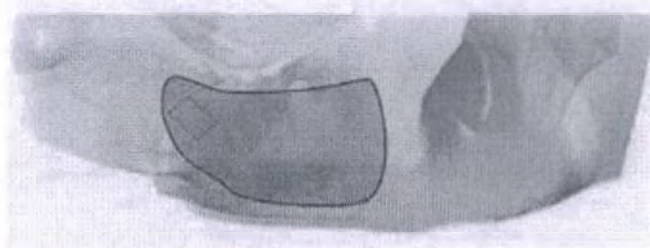

Сделайте окошко

Сделайте окошко размером около 10 мм × 5 мм на боковой стенке пазухи рядом с нижнескуловым гребнем.

Приподнимите слизистую оболочку пазухи

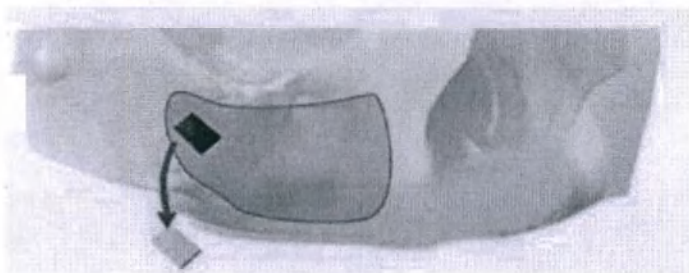


Осторожно приподнимите слизистую пазухи в том месте, где имплантат будет проходить через пазуху, от ее дна до свода, стараясь не проткнуть мембрану.

Внимание: старайтесь не повредить слизистые оболочки пазух во время выполнения этого процесса. Однако протыкание мембраны пазухи не приведет к неблагоприятному исходу операции.

Определите траекторию введения имплантата и начальную точку сверления

– Определите траекторию введения имплантата, поместив круглый бор на боковую стенку верхней челюсти:

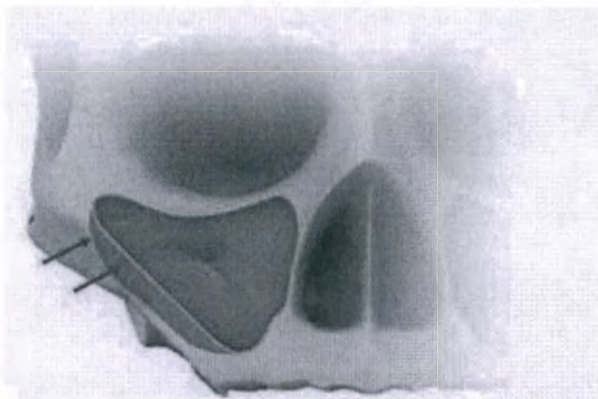

- Кончик бора – на переднескуловой выемке

- Тело бора – над задним боковым углом верхнечелюстной пазухи

- Основание бора – на гребне в месте расположения 2-го премоляра / 1-го моляра.

– Определите точное место на альвеолярном гребне, с которого следует начать сверление, и направление длинной оси имплантата, основываясь на данных об анатомии верхней челюсти, пазухи и скуловой кости.

– Во время сверления придерживайтесь середины ретрактора.

Спланируйте установку имплантата

Спланируйте установку имплантата так, чтобы он располагался в крайнем заднем положении, так, чтобы головка имплантата находилась как можно ближе к альвеолярному гребню (обычно в области 2-го премоляра). Имплантат должен пройти через дно пазухи, сквозь верхнечелюстную пазуху, войти в основание скуловой кости (в заднелатеральной части свода верхнечелюстной пазухи) и пройти через нее, выходя через боковой корковый слой скуловой кости ниже переднескуловой выемки.

Внимание: возможны корректировки описанного метода размещения имплантата из-за анатомических особенностей.



ПОДГОТОВКА К ОСТЕОТОМИИ

Техника сверления

– Сверлите кость поступательными движениями «внутри-наружу» длительностью 1-2 секунды.

– Перемещайте сверло наружу, не останавливая мотор рукоятки. Это позволит смыть осколки кости при работающем орошении.

– Продолжайте до тех пор, пока не достигнете требуемой глубины.

– Во время сверления скорость вращения сверла не должна превышать 2000 об/мин.

– Рекомендуется использовать обильное орошение на протяжении всей операции сверления. Примечания:

– Круглый бор, дрельборы и пилотные сверла поставляются в нестерильном виде, их необходимо простерилизовать перед применением.

– Сверла являются одноразовыми и могут использоваться только для одной операции.

– Дрильборы и пилотные сверла изготовлены из нержавеющей стали с аморфным алмазным покрытием, которое придает им черный цвет.

Внимание:


– Избегайте бокового давления на сверла во время подготовки ложа под имплантат. Боковое давление может привести к растрескиванию сверла.

– Перед началом сверления убедитесь, что сверла прочно закреплены на рукоятке. Незакрепленное сверло может случайно травмировать пациента или членов хирургической бригады.

– Убедитесь, что все соединяющиеся между собой инструменты надежно соединены перед их применением внутри полости рта, чтобы предотвратить случайное проглатывание или аспирацию.

Система измерения глубины

Все сверла доступные в коротком и длинном вариантах.

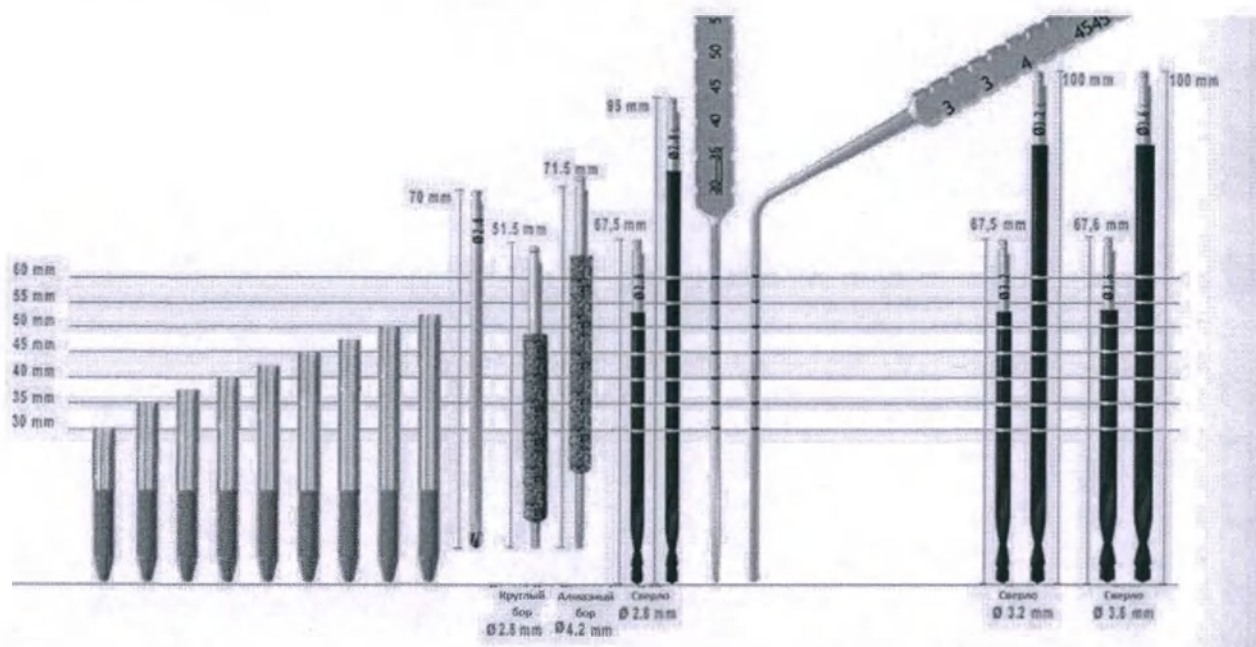


Сделайте отметку в точке входа сверла с помощью круглого бора

– С помощью круглого бора сделайте отметку на небе/гребне для обозначения места ввода имплантата.

– Просверлите стенку и пройдите круглым бором через пазуху, следя за направлением бора через окошко в стенке пазухи. Бор должен быть направлен в сторону ретрактора, который ранее был помещен в выемку.


– Сделайте отметку в точке входа на заднем верхнем своде пазухи, чтобы в нее можно было ввести сверло диаметром 2,8 мм без вибрации. Максимальная скорость 2000 об/мин.

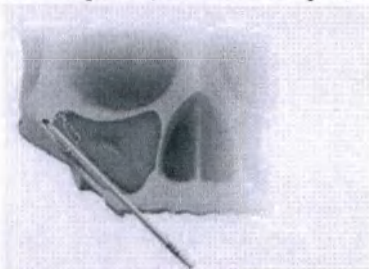

Сверление при помощи дрильбора 2,8 мм


Продолжайте сверление при помощи дрильбора 2,8 мм, пока не дойдете до внешнего коркового слоя скуловой кости в месте разреза.

Максимальная скорость 2000 об/мин.

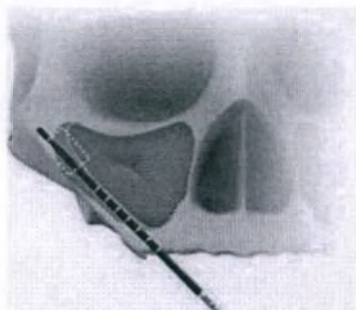

Определите длину имплантата

Используйте прямой глубиномер для определения необходимой длины отверстия для имплантата.

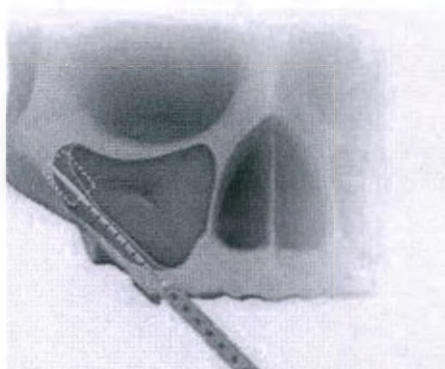

Расширьте отверстия в кости с помощью дрельбора 3,2 мм


Максимальная скорость 2000 об/мин.

Окончательно доработайте отверстия в кости при помощи дрельбора 3,6 мм в случае работы с плотной костной тканью.

Максимальная скорость 2000 об/мин.


Внимание:

- Обеспечьте правильный угол наклона и не допускайте раскачивания сверла, так как это может непреднамеренно расширить место препаровки.
- Если невозможно сохранить целостность мембраны пазухи во время подготовки к остеотомии, то аккуратно смойте ее остатки ирригатором перед вводом имплантата. Остатки слизистой оболочки на кости могут препятствовать остеоинтеграции имплантата.

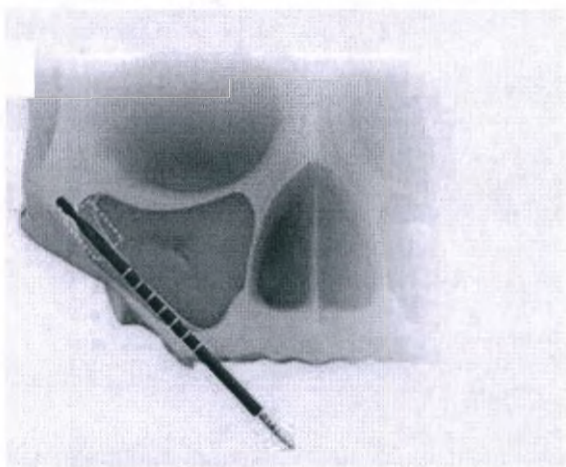

Проверка глубины

Проверьте глубину подготовленного костного ложа с помощью углового глубиномера, чтобы убедиться, что имплантат выбранной длины полностью войдет в отверстие, не задевая апикальной части кости.

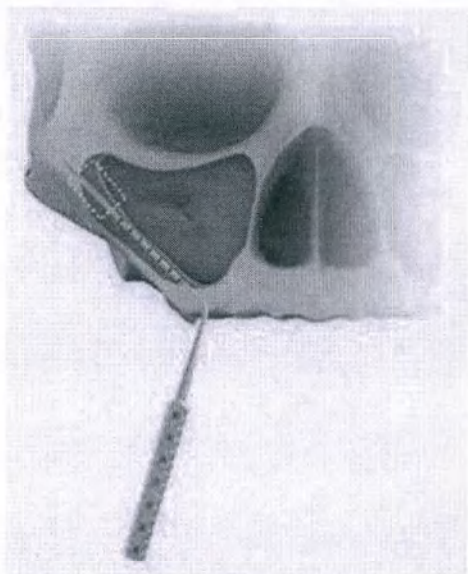

ВВОД/УСТАНОВКА ИМПЛАНТАТА

1 Извлеките имплантат из упаковки

Каждый имплантат упакован в защитную стерильную барьерную упаковку, с напечатанной этикеткой, содержащей переменные данные об имплантате:

Диаметры, длина

SER. номер имплантата, номер партии, сырьевые материалы, срок годности



Перед использованием проверьте целостность стерильной барьерной упаковки, убедитесь, что спаянные швы упаковки не повреждены, пленка Тувек не повреждена, не прорезана и не отслаивается от ламинированного пластикового блистера.

На этикетку блистера нанесен символ SBS, обозначающий «асептическое представление», что означает наличие внешнего стерильного барьера (который представляет собой герметичный блистер), внутри которого содержится дополнительная упаковочная система (флакон с крышкой) для минимизации риска загрязнения после вскрытия упаковки.



Шаг-1 Откройте блистер и извлеките флакон

Откройте блистер, потянув за язычок, расположенный в нижнем левом углу. Внимание: блистер гарантирует стерильность имплантата. Открывайте блистер только непосредственно перед установкой имплантата.



Шаг-2 Откройте крышку флакона.



2 Захват имплантата с помощью инструмента

Окончательная установка дентального имплантата, в зависимости от клинической ситуации, может быть проведена одним из следующих методов:

1. С помощью динамометрического гаечного ключа.
2. С помощью хирургической бормашины.
3. С помощью хирургической отвертки.

Установка с помощью динамометрического ключа

Соедините имплантат к динамометрическому ключу с предустановленным хирургическим адаптером.



Чтобы подсоединить имплантат, слегка надавите на имплантовод.



Введите имплантат в ранее подготовленное остеотомическое отверстие.

Установка с помощью хирургической бормашины

Подсоедините имплантовод к рукоятке.

Чтобы подсоединить имплантат, слегка надавите на имплантовод.

Медленно введите имплантат ранее подготовленное остеотомическое отверстие.
(25 оборотов/минута)



Установка с хирургической отвертки

Хирургическую отвертку также можно использовать для регулировки положения имплантата.

Подсоедините имплантовод к хирургической отвертке.


Чтобы подсоединить имплантат, слегка надавите на имплантовод.

Введите имплантат в ранее подготовленное остеотомическое отверстие.

Важно: применение чрезмерного крутящего момента к имплантату может нарушить целостность его внутреннего соединения и оказать чрезмерное давление на окружающую костную ткань, что отрицательно повлияет на интеграцию имплантата с костью. Крутящий момент при установке имплантата не должен превышать 80 Нсм.



Регулировка расположения имплантата

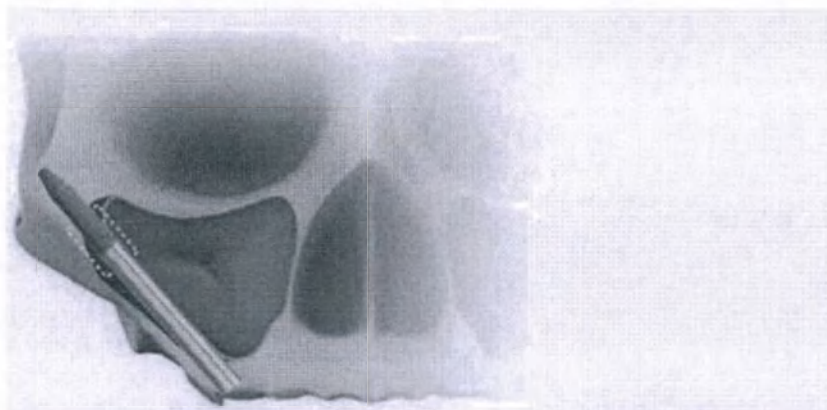

– Вставьте имплантат в подготовленное костное ложе, хирургическая консоль должна быть установлена на 20 Нсм. Для облегчения установки имплантата можно увеличить значение до 50 Нсм.

– Убедитесь, что вы вводите имплантат под правильным углом во время прохождения пазухи, продолжайте введение до тех пор, пока вершина имплантата не войдет в скуловую кость.

Затяните имплантат вручную с помощью динамометрического ключа JD.

Проверьте правильное расположение имплантата.

Установите имплантат

Имплантаты для передней верхней челюсти устанавливаются в соответствии с их хирургическим протоколом.

Закройте место установки имплантата отогнутым лоскутом мембраны и наложите швы, используя подходящую технику.

Существует два варианта завершения операции по имплантации:

Двухступенчатый с задержкой функционирования

С помощью отвертки JD закрепите винт-заглушку на имплантате. Зашейте лоскутом ткани используя подходящую технику.

Примечание: обязательно закройте поверхность углубления в зубном ряду (от ткани), чтобы избежать контакта имплантата с протезом.

либо

Одноступенчатый с немедленным функционированием

Подготовьте временные имплантаты немедленного функционирования для установки на уровне абатментов, изготовив временный мостовидный протез с использованием JD абатментов Мульти-юнит в сочетании с временными цилиндрическими абатментами JD для абатментов абатментов Мульти-юнит.

JD Nasal


Практикующий врач должен пройти специальную подготовку по установке имплантатов JD Nasal, кроме того, операции должны выполняться под надзором опытных имплантологов. При сильно резорбированной костной ткани верхней челюсти можно использовать имплантаты JD Nasal для крепления в кости верхней челюсти, окружающей нос. Костное ложе для имплантата начинается с альвеолярной кости у предкоренного зуба и заканчивается в кости, разделяющей верхнечелюстную пазуху и носовую полость. Длина специализированных имплантатов увеличена, чтобы ее хватило для прохождения через всю полость пазухи. Важно отметить, что при толщине альвеолярной кости менее 3 мм рекомендуется костная трансплантация.

Рентгенографическое исследование

Как и во всех случаях установки имплантатов, рентгенографическая оценка имеет очень важное значение. Согласно протоколу установки назального имплантата, рентгенографическое исследование имеет две главные цели:

1. Выявление патологий в верхнечелюстном синусе, учитывая, что толщина слизистой оболочки антрального отдела не должна превышать 6 мм.
2. Оценка объема костной ткани верхней челюсти в области носа.

НАЗАЛЬНОЕ АНКЕРНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

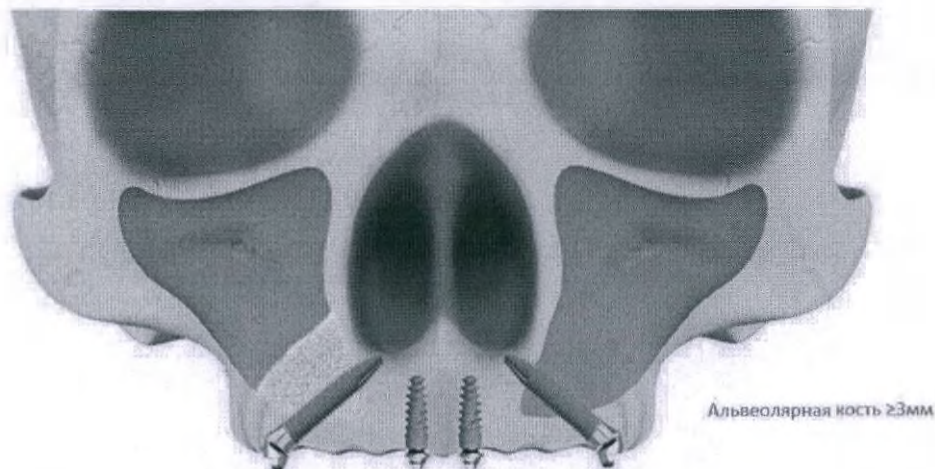

При сильной резорбции кости верхней челюсти можно применять имплантаты JD Nasal, чтобы использовать носовую кость в качестве опоры. Имплантаты JD Nasal позволяют использовать верхнечелюстную кость, окружающую нос, для крепления имплантатов. Костное ложе для имплантата начинается с альвеолярной кости у предкоренного зуба и заканчивается в кости, разделяющей верхнечелюстную пазуху и носовую полость. Длина специализированных имплантатов увеличена, чтобы ее хватило для прохождения через полость пазухи, а также имплантаты загнуты на конце для установки под наклоном. Имплантаты JD Nasal доступны в различных вариантах длины до 26 мм. Полная информация о продукте и протокол сверления приведены на обороте. Хирург самостоятельно принимает решение о необходимости костного трансплантата.

Перед тем, как приступить к процедуре, обязательно убедитесь, что у пациента нет никаких признаков инфекции носовых пазух.

Сверла, входящие в состав хирургического набора, должны использоваться с внешней системой орошения, чтобы предотвратить чрезмерный нагрев костной ткани.

Если невозможно подтвердить постоянную эффективность промывки, сверление необходимо выполнять с перерывами. Сверлите отверстие поступательными движениями «внутри-наружу», не прилагая чрезмерного усилия. При выполнении поступательных движений вам нужно будет полностью вынимать сверло из отверстия, чтобы убедиться в том, что промывка работает.

Сверла имеют наклонные клинья, обеспечивающие однородное распределение охлаждающего физиологического раствора, а также сохранение стружки кортикальной кости, образующейся в процессе сверления после препаровки. При снижении остроты сверла его необходимо отсоединить от рукоятки и очистить. Продолжайте сверлить до тех пор, пока не сверло не достигнет желаемой глубины. В случае если соседние естественные зубы мешают прохождению контрглового наконечника, используйте удлинитель сверла.

Рекомендуется использовать хирургические приводы с регулируемой скоростью и крутящим моментом.


Важно: исходная буровая головка является прецизионной. Буровые головки необходимо заменять примерно через каждые 20 остеотомий или когда их режущая эффективность снижается.

Протокол ненаправленной операции

0. Начните препаровку ложа с помощью сверла JD Nasal Ø2 мм через альвеолярную кость. Рекомендуется сделать окошко в боковой стенке пазухи и аккуратно отогнуть мембрану Шнайдера, стараясь не повредить ее.
1. Если толщина здоровой костной ткани альвеолярного отростка более 3 мм, используйте сверло JD Nasal Ø2 мм, чтобы просверлить альвеолярный отросток, войти в пазуху, пройти через нее и войти в боковую стенку носа.



2. Используйте глубиномер на 26 мм для определения глубины отверстия и выбора имплантата.

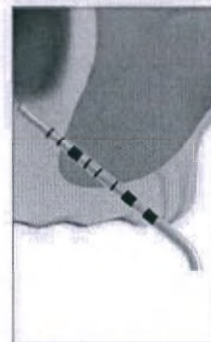

3. Просверлите отверстие на окончательную глубину с помощью назального сверла JD Ø2,4 мм



4. Продолжайте остеотомию, используя стандартный дрельбор Ø2,8 мм на входе на 6 мм.



5. Продолжайте остеотомию, используя стандартный дрельбор Ø3,2 мм на входе на 6 мм.



6. Завершите остеотомию, используя стандартный дрельбор Ø3,6 мм на входе на 6 мм.



7. Введите имплантат, установите его в окончательное положение.



8. Примечание: хирург может прибегнуть к устройству окошка в боковой стенке пазухи. Аккуратно отогните мембрану Шнайдера и вставьте костный трансплантат в пазуху.




Протокол операции с компьютерной навигацией

1. Начните остеотомию используя сначала направленное сверло JD JDGD24-060 Ø 2,4 x L 6 мм.
2. Продолжите с помощью направленного сверла JDNasal® Ø 2,0 той же длины, что и имплантат (выберите длину направленного сверла JDNasal®: L 20-22-24-26 мм).
3. Продолжите с помощью направленного сверла JDNasal® Ø 2,4 той же длины, что и имплантат (выберите длину направленного сверла JDNasal®: L 20-22-24-26 мм).
4. Продолжите с помощью направленного сверла JD Ø2,8 мм x L 6 мм.
5. Продолжите остеотомию с помощью направленного сверла JD Ø3,2 мм x L 6 мм.
6. Завершите остеотомию с помощью направленного сверла JD Ø3,6 мм x L 6 мм.


ПРОЦЕДУРА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАТА

Существует три варианта завершения хирургического вмешательства при установке имплантатов J Dental Care.

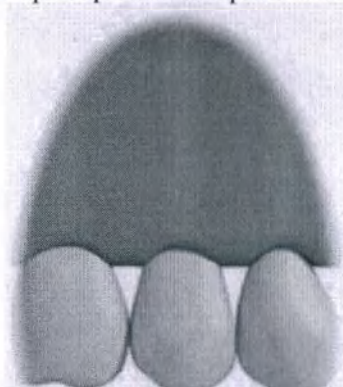


**НЕМЕДЛЕННАЯ
НАГРУЗКА**

Если имплантат установлен с высокой первичной стабильностью, можно зафиксировать временный протез с помощью временных компонентов J Dental Care или окончательных абатментов (см. вышеупомянутые процедуры)

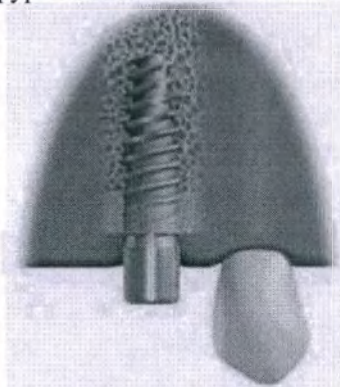

**НЕПОГРУЖНОЕ
ЗАЖИВЛЕНИЕ**

Вверните в имплантат заживляющий абатмент, адаптируйте мягкие ткани и наложите шов.

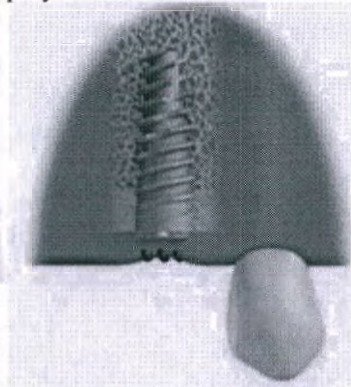

**ПОГРУЖНОЕ
ЗАЖИВЛЕНИЕ**

Вкрутите винт-заглушку в имплантат и наложите шов, используя предпочитаемую технику.

В зависимости от клинической ситуации и выбора хирурга существует три варианта закрепления протезных компонентов системы J Dental Care:

1. С помощью динамометрического ключа: подсоедините динамометрический ключ к ортопедическому адаптеру и с помощью отвертки продолжите ввинчивание ортопедических компонентов.



2. С помощью хирургической бормашины, соединенной с механической отверткой.



3. С помощью ручной отвертки. Подсоедините ортопедический адаптер к механической отвертке и вручную ввинтите ортопедический компонент.



ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ



Показания: закрытие соединения имплантата для заживления без погружения.
Установите формирователь десны правильного диаметра и высоты.



Адаптируйте мягкие ткани и зашейте их вокруг формирователя десны.

Эксклюзивный дизайн формирователя десны со встроенным переключением платформ обеспечивает формирование мягких тканей большей толщины. Это приводит к более долговременной стабильности этих тканей и к ограниченной резорбции гребневой кости



ТЕХНИКА СНЯТИЯ СЛЕПКОВ


Методы получения слепков, используемые при лечении имплантатами:

- Закрытая ложка
- Открытая ложка
- Обычный

Техника снятия слепков закрытой ложкой

Этот метод рекомендуется для одиночных реставраций или для множественных реставраций, когда имплантаты устанавливаются достаточно параллельно друг другу. В лабораторию поступает слепок, совмещенный с оттиском. Подсоедините копию соответствующего имплантата или абатмента к закрытому колпачку ложки, а


затем вставьте оттисковый трансфер на его место в оттиске. Залейте оттиск материалом для мягких тканей и гипсом.

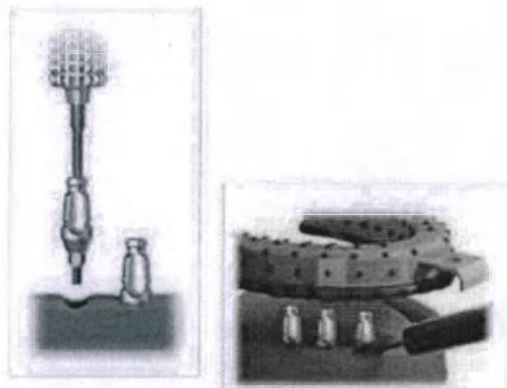

Техника снятия слепков открытой ложкой

Этот метод рекомендуется для реставраций из нескольких единиц, где отсутствие параллельности может затруднить снятие слепка с закрытой ложки и исказить слепок. Ограничением может быть отсутствие достаточного пространства из-за ограниченного открывания рта в задней части.

После снятия слепка изо рта вместе с оттисковым трансфером, прикрепите к последнему соответствующий аналог имплантата или абатмента. Залейте оттиск материалом для мягких тканей и гипсом.

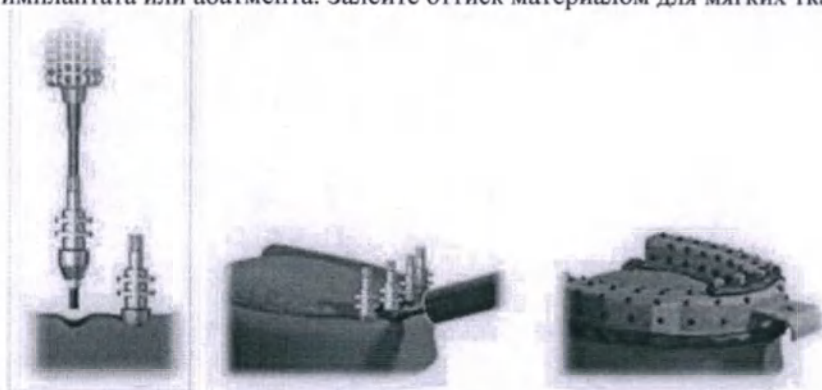


Слепок с уровня имплантата

Перенесите положение имплантата во рту пациента на эталонную модель, чтобы выбрать ортопедический абатмент, соответствующий имеющемуся клиническому случаю и требованиям стоматолога.

Слепок с уровня абатментов

Стоматолог выбирает, позиционирует и устанавливает абатмент. Чтобы перенести положение абатмента во рту пациента на ортопедическую модель, необходимо использовать оттисковый трансфер, соответствующий выбранному абатменту. Реставрация будет адаптироваться к абатменту.

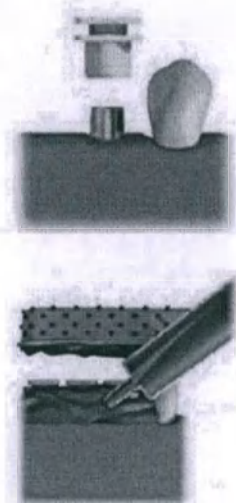

Обычный слепок

Этот метод используется, когда стоматолог выбирает и модифицирует окончательный абатмент для цемментирования одиночной или множественной реставрации (техника коронок и мостовидных протезов). Абатмент прикрепляется к имплантату, модифицированному с использованием традиционных методов препарирования, непосредственно во рту с помощью высокоскоростного наконечника с обильным орошением. Выполните традиционный слепок абатмента или абатментов, предварительно подготовленных во рту (рекомендуется использовать ретракционный шнур).



ВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Абатмент временный

АБАТМЕНТ ВРЕМЕННЫЙ С ЗАХВАТОМ



Показания: временные ввинчиваемые одиночные имплантаты и цементированные временные конструкции с множественными имплантатами

АБАТМЕНТ ВРЕМЕННЫЙ БЕЗ ЗАХВАТА



Показания: ввинчиваемые временные конструкции из нескольких имплантатов.

Для цементируемых коронок и мостов

Залейте и изготовьте эталонную модель, используя соответствующий аналог. Установите и прикрепите к копии временный фиксирующий абатмент.

Измените временный абатмент в соответствии с существующей ситуацией во рту пациента, проверив необходимое окклюзионное пространство для покрывающих материалов (не уменьшайте высоту абатмента до менее чем 4 мм).

Выполните фиксацию коронки или мостовидного протеза обычным способом.

Установите временный абатмент на имплантат и ввинтите вручную или с помощью динамометрического ключа с крутящим моментом от 15 до 35 Н/см. Накройте головку винта ватой и временно закройте винтовой канал.

Заполните внутреннюю часть коронки или мостовидного протеза временным цементом и поместите его на подготовленные временные абатменты.

Для ввинчивающихся коронок и мостов

Залейте и изготовьте эталонную модель, используя соответствующий аналог. Установите и прикрепите временный абатмент к копии.

Измените временный абатмент в соответствии с существующей ситуацией во рту пациента, проверив необходимое окклюзионное пространство для покрывающих материалов (не уменьшайте абатмент до высоты менее 4 мм).

Временно закройте винтовой канал (например, ватой) и изготовьте ввинчиваемую коронку или мостовидный протез с помощью обычных процедур.

Установите временный абатмент на имплантат и ввинтите вручную или с помощью динамометрического ключа с крутящим моментом от 15 до 35 Н/см.

Закройте винтовой канал ватой и временно закройте его временным пломбировочным материалом (например, композитом).

Примечание: для проверки правильности адаптации абатмента к имплантату необходимо выполнить рентгеновский контроль.

ВРЕМЕННЫЕ РЕСТАВРАЦИИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ В ПРИСУТСТВИИ ПАЦИЕНТА

Абатмент GP



Показания: цементированные временные реставрации на одиночных и множественных имплантатах.

Установите абатмент на имплант и прикрутите его.

Проверьте направление и длину абатмента GP относительно соседних зубов / имплантатов и необходимое окклюзионное пространство для покрывающих материалов.

Отвинтите абатмент, наденьте его на копию имплантата и измените его в зависимости от существующей ситуации (не уменьшайте абатмент до высоты менее чем 4 мм).


Установите модифицированный абатмент GP на имплантат и ввинтите его с крутящим моментом 20 Н/см, используя динамометрический ключ или хирургический двигатель, подключенный к механической отвертке.



Примечание: для проверки правильности адаптации абатмента к имплантату рекомендуется провести рентгеновский контроль.

Временную реставрацию можно перебазировать акриловой смолой прямо во рту, отшлифовать, отполировать и закрепить временным цементом.

Абатмент GP можно также использовать в качестве окончательного абатмента. После заживления тканей можно сделать обычный слепок абатмента (рекомендуется использовать ретракционный шнур) для изготовления окончательного протеза.

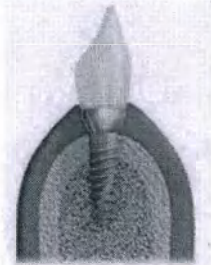

ВЫБОР АБАТМЕНТОВ

Выбор окончательного абатмента имеет решающее значение для того, чтобы окончательный результат протеза соответствовал функциональным и эстетическим требованиям стоматолога и пациента. Стоматолог может выбрать абатмент и впоследствии отправить в лабораторию слепок, сделанный на уровне абатмента, или может сделать прямой слепок с уровня имплантата, а затем сообщить зубному технику, какой абатмент использовать. При выборе окончательного абатмента необходимо учитывать определенные аспекты.

Тип протеза

Цементируемый протез

Цементируемые протезы устанавливаются с использованием тех же стандартных протоколов, которые используются в технике цементированных коронок и мостовидных протезов над естественными зубами. Абатменты ввинчиваются в имплантаты, и на них цементируется протез.

Ввинчиваемый протез

Ввинчиваемый протез фиксируется винтами через окклюзионную часть протеза. Винт проходит через коронку и входит в абатмент или имплантат. Стоматолог может в любой момент открутить протез.

Высота мягких тканей

Чтобы определить правильную высоту мягких тканей, измерьте зондом глубину последних вокруг имплантата. Выбор трансгингивальной высоты абатмента будет зависеть от гигиенических и эстетических соображений стоматолога.

Межзубное расстояние и придесневой профиль

Имеющееся межзубное расстояние и придесневой профиль являются ключевыми факторами при выборе абатментов.

Угол наклона абатмента

Угол наклона имплантата также определяет, какой абатмент можно использовать, прямой или угловой, или если необходимо использовать индивидуальный абатмент.

ТИПЫ ПРОТЕЗОВ



Одиночные цементируемые протезы / множественные цементируемые протезы



Абатмент
GP



Прямой или анатомический угловой
абатмент



Прямой
абатмент



Ввинчиваемые протезы



Абатмент Мульти-юнит



Абатмент Мульти-юнит угловой



Съемные каркасные протезы

Съемный протез



Абатмент Мульти-юнит



Абатмент Мульти-юнит
угловой



Абатмент шаровидный



Абатмент
Emi

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Имплантаты малого диаметра и угловой абатмент не рекомендуются для задней области.

ЦЕМЕНТИРУЕМЫЙ ПРОТЕЗ

Абатмент прямой




Показания: одиночные и множественные цементируемые протезы.

В лаборатории делается слепок на уровне имплантата с аналогом имплантата. Залейте и изготовьте эталонную модель.

Выберите титановый абатмент, соответствующий высоте мягких тканей, и прикрепите его к аналогу имплантата с помощью лабораторного винта.

Измените абатмент и изготовьте протез, используя обычные методы протезирования (не уменьшайте абатмент до высоты менее чем 4 мм).

Абатмент анатомический

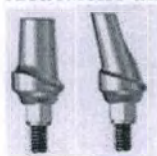

Показания: одиночные и множественные цементируемые протезы.


Анатомический абатмент разработан с анатомической фестонной препарацией шеечного края. Это обеспечивает меньшую потребность в препарировании абатмента и лучшую адаптацию к естественному профилю мягких тканей, учитывая, что он доступен в вариантах с разной высотой.

Приведенное ниже описание прямого анатомического абатмента применимо также к абатменту анатомическому, расположенному под углом 15°.

- Лаборатория получает оттиск на уровне имплантата с аналогом имплантата.
- Залейте и изготовьте эталонную модель.
- Выберите анатомический абатмент и прикрепите его к аналогу имплантата с помощью лабораторного винта.
- Измените абатмент и изготовьте протез, используя стандартные протоколы протезирования (не уменьшайте абатмент до высоты менее чем 4 мм).

ВКРУЧИВАЕМЫЙ ПРОТЕЗ

Абатмент Мульти-юнит

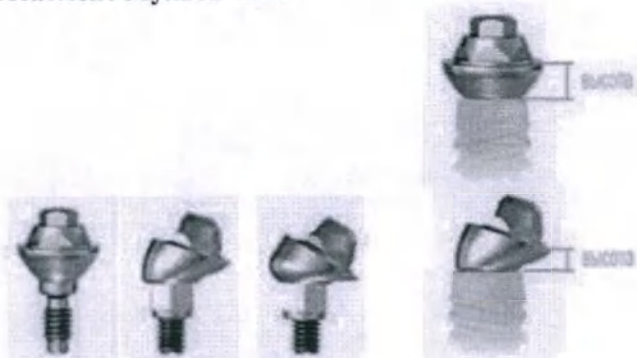

Показания: вкручиваемые протезы.

Абатменты Мульти-юнит предназначены только для многокомпонентных реставраций, без коррекции угла.


Присоединение прямого абатмента Мульти-юнит

Прикрутите конический абатмент к головке имплантата в правильном положении с помощью пластикового транспортера.

Если высота недостаточна, транспортер можно разрезать.

После установки пластиковый транспортер можно вручную отсоединить от абатмента.

Для проверки правильности адаптации абатмента к имплантату рекомендуется провести рентгенологический контроль. Закрутите абатмент с усилием 35 Н/см, используя динамометрический ключ или хирургический двигатель, подключенный к отвертке.

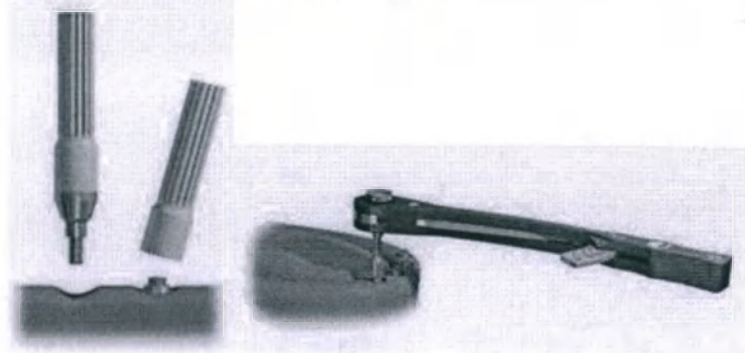

Присоединение абатмента Мульти-юнит углового 17° и 30°

Абатмент можно легко подсоединить с помощью предварительно смонтированного транспортера.

Учтите, что для установки абатмента возможны различные положения.

Ввинчивайте, пока не заметите сопротивление.

Чтобы проверить правильность установки абатмента в имплантат, рекомендуется пройти рентгенологический контроль.


Вытяните транспортер вручную и закрутите с усилием 35 Н/см, используя динамометрический ключ или хирургический двигатель, подключенный к отвертке.



Оттиск с закрытой ложки для абатмента Мульти-юнит

Установите трансфер для закрытой ложки на абатмент Мульти-юнит. Введите оттискный материал и снимите слепок.

Когда материал затвердеет, снимите слепок и снимите оттисковые трансферы, чтобы прикрепить аналоги и правильно вставить в слепок.

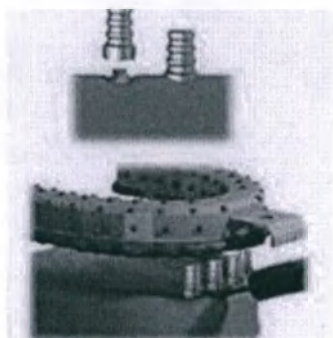


Оттиск с открытой ложки для абатмента Мульти-юнит

Поместите трансфер для открытой ложки на абатмент Мульти-юнит.

Введите оттисковый материал вокруг трансфера и внутрь оттисковой ложки.

Поместите ложку в рот и убедитесь, что вы видите, что все направляющие винты оттисковых трансферов выходят. Когда материал затвердеет, открутите направляющие винты, чтобы извлечь оттисковые трансферы вместе со слепком.

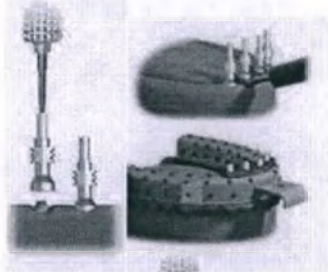

Лабораторная процедура

Лаборатория получает оттиск с конического уровня и соединяет дубликаты абатмента Мульти-юнит с трансферами.

Залейте и изготовьте эталонную модель.

Закрепите абатмент для воскового моделирования для абатмента Мульти-юнит на его дубликатах. Создайте инфраструктуру обычными методами. Накройте инфраструктуру облицовочным материалом и отправьте готовый протез стоматологу.

Примечание: возможно изготовление временного протеза из абатмента Мульти-юнит с использованием временного цилиндра для абатмента Мульти-юнит.



Присоединение окончательного протеза

Присоедините протез к абатменту Мульти-юнит с помощью ортопедических винтов. Начиная с центральной зоны, отрегулируйте остальные винты, чередуя левую и правую стороны.

Вкрутите ортопедический винт с усилием 15 Н/см, используя динамометрический ключ или хирургическую бормашину, подключенную к отвертке.

Закройте каналы доступа к винтам ватой и закройте их временным пломбировочным материалом (например, композитом).



Абатмент GP абатмента Мульти-юнит



Показания: цементированные временные реставрации с несколькими имплантатами с абатментами Мульти-юнит.

После установки абатментов Мульти-юнит, установите абатменты GP абатмента Мульти-юнит и прикрутите их. Проверьте направление и длину абатментов относительно соседних зубов / имплантатов и необходимое окклюзионное пространство для покрывающих материалов.

Отвинтите абатменты, наденьте их на дубликаты абатмента Мульти-юнит и измените их в зависимости от существующей ситуации (не уменьшайте абатмент до высоты менее чем 4 мм).



Установите модифицированные абатменты GP и завинтите их с крутящим моментом 20 Н/см, используя динамометрический ключ или хирургический двигатель, подключенный к механической отвертке.



Временную реставрацию можно перебазировать акриловой смолой прямо во рту, отшлифовать, отполировать и зацементировать временным цементом.



СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ

Абатмент шаровидный



Показания: съемные протезы с шаровидным креплением.

Абатмент Еmі



Показания: съемные протезы с креплением Еmі.

Подключение и оттиск

Прикрутите шаровидный абатмент или абатмент еmі к головке имплантата с помощью отвертки.

Чтобы проверить правильность адаптации абатмента к имплантату, рекомендуется выполнить рентгенологический контроль.

Снимите слепок обычным способом. Когда материал отвердеет, вы можете снять слепок и подсоединить дубликаты шаровидного абатмента или абатмента Еmі.



Лабораторные процедуры

В лаборатории делается оттиск на уровне абатмента с установленными дубликатами шаровидных абатментов или абатмента Еmі.

Залейте и изготовьте эталонную модель.

Заблокируйте дубликаты абатмента и подготовьте окклюзионный валик. Отправьте к стоматологу для определения окклюзии.

Подготовьте зубной ряд по стандартной методике.

Поместите металлические охватывающие детали в дубликаты шаровидных абатментов или абатментов еmі так, чтобы они были параллельны друг другу в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Заблокируйте пространство между охватывающей частью и дубликатом. Дайте материалу отвердеть и обработайте протез обычным способом. Отправьте к стоматологу для установки.



7. Противопоказания.

Установка зубных имплантатов может быть затруднена из-за состояния пациента, которое является противопоказанием для хирургического вмешательства.

Абсолютные противопоказания: аллергия на титан, недавний инфаркт миокарда, протезирование клапана, тяжелые заболевания почек, тяжелые заболевания печени, устойчивый к лечению диабет, недавняя высокодозная лучевая терапия, тяжелый хронический алкоголизм, прием наркотиков, неизлечимые заболевания и рак.

Относительные противопоказания: химиотерапия, легкие почечные нарушения, легкие печеночные расстройства, эндокринные расстройства, психологические и психические расстройства, отсутствие понимания и мотивации, СПИД, ВИЧ-положительные случаи, длительный прием кортикостероидов, нарушения обмена кальция и фосфора, эритропоэтические расстройства, отравление никотином.

Зубные имплантаты J Dental Care не следует устанавливать пациентам, у которых оставшаяся челюстная кость слишком уменьшена или качество кости низкое, чтобы обеспечить адекватную первичную стабильность.

Имплантаты **JDIcon Ultra.S** не следует устанавливать пациентам с бруксизмом или парафункциональными габритами. Имплантаты **JDIcon Ultra.S** не следует устанавливать при замене одного зуба имплантатом в премолярной и молярной областях.

Имплантаты **JDNasal** и **JDZygoma** нельзя устанавливать пациентам с патологией гайморовой пазухи или пациентам с анатомическими дефектами гайморовой пазухи.

8. Побочные эффекты.

Возможные побочные эффекты, связанные с использованием дентальных имплантатов, могут включать:

- Нарушение остеоинтеграции
- Потеря остеоинтеграции
- Расхождение, требующее пересадки кости
- Перфорация гайморовой пазухи (для JDEvolution, JDIcon, JDIcon Ultra.S)
- Поражение нижнего альвеолярного нерва (для JDEvolution, JDIcon, JDIcon Ultra.S)
- Постоянная боль, онемение, парестезия
- Воспаление или инфекция
- Чрезмерная потеря костной массы, требующая вмешательства
- Поломка имплантата

9. Внимание.

Никогда не превышайте момент затяжки 60 Нсм при установке имплантата и момента затяжки 20 Нсм для ортопедического винта (только для JDIcon Ultra.S).

10. Предупреждения.

Рекомендуется, чтобы врачи, как новички, так и опытные пользователи имплантатов, были в курсе особенностей зубных имплантатов и абатментов J Dental Care, и их хирургического применения. Для получения подробной информации о способе использования зубных имплантатов и абатментов J Dental Care, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Чрезмерная потеря костной массы или поломка имплантата могут произойти, если имплантат нагружен сверх его функциональных возможностей. Физиологические и анатомические условия могут отрицательно повлиять на работу зубных имплантатов. Это следует учитывать при установке зубных имплантатов пациентам со следующими особенностями:

- некачественная кость
- плохая гигиена полости рта *
- заболевания, такие как заболевания крови или неконтролируемые гормональные состояния

* Необходимы периодические проверки на наличие налета в области имплантатов посредством повторных сеансов (каждые 4–6 месяцев), чтобы предотвратить образование перимплантита.

Изделие предназначено для одноразового использования. Не используйте повторно и утилизируйте после использования в соответствии с правилами. Любое повторное использование может поставить под угрозу или серьезно ухудшить состояние здоровья из-за риска заражения пациента или пользователя, а также потери функциональности и эффективности изделия.

Имплантаты малого диаметра и угловые абатменты не рекомендуются для заднего отдела.

Система имплантатов J Dental Care не была оценена на безопасность и совместимость в магнитно-резонансной среде. Не было испытаний на термообработку, миграцию и перемещение на снимке в магнитно-резонансной среде. Безопасность системы в магнитно-резонансной среде неизвестна.

11. Меры предосторожности.

Имплантат JDEvolution упрощает хирургические методы, необходимые для установки зубных имплантатов, но врач-клиницист должен пройти специальное обучение. Неправильная техника может привести к отторжению имплантата или потере опорной кости, недостаточной первичной стабильности или другим неблагоприятным последствиям. Следует проводить тщательный отбор кандидатов на имплантаты, включая оценку способности пациента поддерживать правильную гигиену полости рта, мотивацию пациента, наличие парафункциональных привычек. Визуальный осмотр, а также периапикальные рентгенограммы необходимы для определения анатомических ориентиров, окклюзионных состояний, состояния пародонта и качества кости. Настоятельно рекомендуется использовать компьютерную томографию для реальной оценки размеров и качества кости.

JDNasal

Неправильная техника может привести к отторжению имплантата или потере опорной кости, недостаточной первичной стабильности или другим неблагоприятным последствиям. Необходимо провести тщательный отбор кандидатов на имплантаты, включая отсутствие патологии верхнечелюстной пазухи и оценку способности пациента поддерживать правильную гигиену полости рта, мотивацию пациента, наличие парафункциональных привычек. Визуальный осмотр, а также периапикальные рентгенограммы необходимы для определения анатомических ориентиров, окклюзионных состояний, состояния пародонта и качества кости. Настоятельно рекомендуется использовать компьютерную томографию, чтобы обеспечить реальную оценку размеров и качества кости.

Общие меры

Врач-клиницист должен пройти специальный курс повышения квалификации, по установке имплантата JDNasal.

При сильно резорбированной верхней челюсти можно использовать имплантаты JDNasal, чтобы задействовать верхнечелюстную кость, окружающую нос.

Место имплантации начинается в альвеолярной кости у предмоляра и заканчивается костью, разделяющей верхнечелюстную пазуху и полость носа. Имплантаты должны быть очень длинными, чтобы охватить пазуху. Важно отметить, что костная трансплантация рекомендуется при толщине альвеолярной кости менее 3 мм.

Рентгенологическое обследование

Как и в случае с любым пациентом с имплантатом, рентгенологическое обследование имеет важное значение. Что касается протокола имплантации при помощи JDNasal, то перед ним стоят следующие цели:

1. Выявить наличие любой патологии в гайморовых пазухах, учитывая, что толщина слизистой оболочки антрального отдела не должна превышать 6 мм.
2. Оценить объем верхней челюсти, окружающей нос.

Последовательность подготовки площадки

0. Начните препарирование ложа с помощью сверла JDNasal диаметром 2 мм через альвеолярную кость. Рекомендуется сделать отверстие в боковой стенке пазухи и мягко поднять мембрану Шнейдера, не прокалывая ее.

1. Если в альвеолярном отростке более 3 мм здоровой кости, используйте сверло JDNasal диаметром 2 мм, для просверливания альвеолярного отростка в пазухе и поперек ее, затрагивая боковую стенку носа. Необязательно, поднимать мембрану Шнейдера от пазухи.
2. Глубиномер 26 мм можно использовать для определения глубины отверстия, для дальнейшего выбора имплантата.
3. Просверлите до конечной глубины сверлом JDNasal диаметром 2,4 мм.
4. Продолжите со стандартным спиральным сверлом диаметром 2,8 мм на входе на 6 мм.
5. Завершите остеотомию стандартным спиральным сверлом диаметром 3,2 мм на входе на 6 мм.
6. Установите имплантат до достижения окончательного положения.
7. ПРИМЕЧАНИЕ: Хирург может сделать отверстие в боковой стенке пазухи. Аккуратно поднять мембрану Шнейдера и вставить костный трансплантат в пазуху.

JDZygoma

Неправильная техника может привести к отторжению имплантата или потере опорной кости, недостаточной первичной стабильности или другим неблагоприятным последствиям.

Необходимо провести тщательный отбор кандидатов на имплантаты, включая отсутствие патологии верхнечелюстной пазухи и оценку способности пациента поддерживать правильную гигиену полости рта, мотивацию пациента, наличие парафункциональных привычек. Визуальный осмотр, а также периапикальные рентгенограммы необходимы для определения анатомических ориентиров, окклюзионных состояний, состояния пародонта и качества кости. Настоятельно рекомендуется (стоматологическое сканирование ТАС) компьютерная томография, чтобы обеспечить реальную оценку размеров и качества кости.

Общие меры

Врач-клиницист должен пройти специальный курс повышения квалификации, по установке имплантата JDZygoma.

Имплантаты JDZygoma предназначены для проникновения и использования скуловой кости. Имплантаты JDZygoma могут быть наклонены до 45 ° от окклюзионной плоскости.

Имплантация начинается с обнажения боковой стенки верхней челюсти слизисто-надкостничного лоскута, общая толщина увеличивается путем выполнения гребневого надреза с двусторонним дистальным вертикальным надрезом на участках бугорков. Во время хирургического вмешательства на боковой стенке челюсти необходимо обращать внимание на вертикальные структуры, включая нервы, вены и артерии. Повреждения этих анатомических структур могут привести к таким осложнениям, как травмы глаза, а также к обширному кровотечению и дисфункциям, связанным с нервами. В целом, наиболее заметными рисками, связанными с имплантатами JDZygoma, являются синусит и образования фистулы.

Рентгенологическое обследование

Как и в случае с любым пациентом с имплантатом, рентгенологическое обследование имеет важное значение. Что касается протокола имплантации при помощи JDZygoma, то перед ним стоят следующие цели:

1. Выявить наличие любой патологии в гайморовых пазухах, учитывая, что толщина слизистой оболочки антрального отдела не должна превышать 6 мм.
2. Оценить объем верхней челюсти, окружающей скуловую полость.

Последовательность подготовки площадки

Сделайте входное отверстие с помощью сверла с круглым бором, диаметром 2,8 мм, продолжайте сверлить, пока сверло не проникнет во внешний кортикальный слой скуловой кости. Продолжите сверлить с помощью сверла диаметром 3,2 мм, а если кость твердая, завершите остеотомию сверлом диаметром 3,6 мм.

12. Уход и очистка, стерилизация.

Все имплантаты поставляются стерильными и предназначены для одноразового использования до истечения указанного срока годности. Не стерилизовать повторно. Не используйте имплантаты, если упаковка была повреждена или вскрыта ранее. Использование нестерильного устройства может привести к инфицированию тканей или инфекционным заболеваниям.

Все компоненты системы дентальной имплантации J DENTAL CARE стерилизованы посредством гамма-облучения и готовы к использованию.

Открывайте имплантаты с винтами-заглушками и ортопедические компоненты над стерильной поверхностью. Изделие нетоксично, апиrogenно.

13. Условия эксплуатации и хранения. Срок годности.

Компоненты системы должны храниться в оригинальных упаковках, в сухом помещении при комнатной температуре.

Хранение	
Температура	20°±5°C
Атмосферное давление	Н/П
Относительная влажность	Н/П

Эксплуатация	
Температура	20°±5°C
Атмосферное давление	Н/П
Относительная влажность	Н/П

Срок годности (стерильности) имплантатов составляет 5 лет.

Постоянный контакт с внутренней средой организма при температуре: + 35°C - + 37°C.

Период имплантации неограничен, при адекватной имплантации и гигиене полости рта имплантаты устанавливаются на всю жизнь.

14. Гарантийные обязательства.



В случае неудачи имплантации или по другим вопросам качества медицинского изделия обращаться по адресу ООО «Имплант Сервис»


107031, г. Москва, ул. Рождественка, дом 5/7, строение. 2, Э 3 пом. V К 4 ОФ 261

Тел. +79788671550

www.jdentalcare.ru

15. Символы, нанесенные на упаковку медицинского изделия.

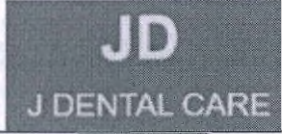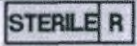СИМВОЛ	РАСШИФРОВКА
	Логотип производителя
	
	Радиационная стерилизация

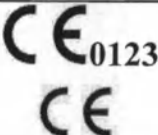	Запрет на повторное применение
	Использовать до
	Код партии
	Номер по каталогу
	Изготовитель
	Знак соответствия директиве ЕС
	Осторожно!
	обратитесь к инструкции по применению
	дата изготовления
	Согласно законодательству, продажа данного изделия разрешена только лицензированному врачу или стоматологу или по его поручению.
	Одинарная барьерная система для стерилизации с внутренней защитной упаковкой
	Размер отвертки 1,27 мм (используется для ортопедических компонентов)
	Индикатор стерилизации
	Не использовать при повреждении упаковки
	Беречь от влаги
	Баркод

16. Основные параметры, характеристики (свойства) медицинского изделия/технические характеристики медицинского изделия.

п/п	Артикул	Наименование	Основные характеристики
-----	---------	--------------	-------------------------

1	IC39080	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 3.9 мм, длина 8 мм	Диаметр: 3.95 мм 0.00/+ 0.05 мм Длина: 8 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.21 г ± 10%
2	IC39100	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 3.9 мм, длина 10 мм	Диаметр: 3.95 мм 0.00/+ 0.05 мм Длина: 10 мм -0.40 /-0.20 мм Масса: 0.26 г ± 10%
3	IC39115	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 3.9 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 3.95 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 11.5 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.30 г ± 10%
4	IC39130	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 3.9 мм, длина 13 мм	Диаметр: 3.95 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 13 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.34 г ± 10%
5	IC39150	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 3.9 мм, длина 15 мм	Диаметр: 3.95 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 15 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.40 г ± 10%
6	IC39180	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 3.9 мм, длина 18 мм	Диаметр: 3.95 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 18 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.55 г ± 10%
7	IC39200	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 3.9 мм, длина 20 мм	Диаметр: 3.95 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 20 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.60 г ± 10%
8	IC43060	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 6 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 6 мм +0.10 / 0.00 мм Масса: 0.19 г ± 10%
9	IC43080	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 8 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 8 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.25 г ± 10%
10	IC43100	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 10 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 10 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.33 г ± 10%
11	IC43115	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 11.5 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.38 г ± 10%
12	IC43130	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 13 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 13 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.44 г ± 10%
13	IC43150	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 15 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 15 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.51 г ± 10%
14	IC50060	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 6 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 6 мм 0.00/+0.010 мм Масса: 0.26 г ± 10%
15	IC50080	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 8 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 8 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.38 г ± 10%
16	IC50100	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 10 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина 10 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.47 г ± 10%
17	IC50115	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 11.5 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.48 г ± 10%
18	IC50130	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 13 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 13 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.61 г ± 10%
19	IC50150	Имплантат с полированной шейкой JDIcon с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 15 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 15 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.71 г ± 10%
20	IC39080:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 3.9 мм, длина 8 мм	Диаметр: 3.95 мм 0.00/+ 0.05 мм Длина: 8 мм -0.20/-0.40 мм

			Масса: 0.21 г ± 10%
21	IC39100:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 3.9 мм, длина 10 мм	Диаметр: 3.95 мм 0.00/+ 0.05 мм Длина: 10 мм -0.40 /-0.20 мм Масса: 0.26 г ± 10%
22	IC39115:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 3.9 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 3.95 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 11.5 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.30 г ± 10%
23	IC39130:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 3.9 мм, длина 13 мм	Диаметр: 3.95 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 13 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.34 г ± 10%
24	IC39150:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 3.9 мм, длина 15 мм	Диаметр: 3.95 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 15 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.40 г ± 10%
25	IC39180:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 3.9 мм, длина 18 мм	Диаметр: 3.95 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 18 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.55 г ± 10%
26	IC39200:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 3.9 мм, длина 20 мм	Диаметр: 3.95 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 20 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.60 г ± 10%
27	IC43060:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 6 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 6 мм +0.10 / 0.00 мм Масса: 0.19 г ± 10%
28	IC43080:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 8 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 8 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.25 г ± 10%
29	IC43100:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 10 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 10 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.33 г ± 10%
30	IC43115:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 11.5 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.38 г ± 10%
31	IC43130:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 13 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 13 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.44 г ± 10%
32	IC43150:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 15 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 15 мм -0.40/-0.20 мм Масса: 0.51 г ± 10%
33	IC50060:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 6 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 6 мм 0.00/+0.010 мм Масса: 0.26 г ± 10%
34	IC50080:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 8 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 8 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.38 г ± 10%
35	IC50100:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 10 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 10 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.47 г ± 10%
36	IC50115:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.000/-0.02 мм Длина: 11.5 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.54 г ± 10%
37	IC50130:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 13 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 13 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.61 г ± 10%
38	IC50150:	Имплантат JDIcon F с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 15 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 15 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.71 г ± 10%
39	IC27080	Имплантат JDIcon Ultra.S с винтом-заглушкой, диаметр 2.75 мм, длина 8 мм	Диаметр: 2.75 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 8 мм -0.10/-0.30 мм Масса: 0.098 г ± 10%

40	IC27100	Имплантат JDIcon Ultra.S с винтом-заглушкой, диаметр 2.75 мм, длина 10 мм	Диаметр: 2.75 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 10 мм -0.10/-0.30 мм Масса: 0.147 г ± 10%
41	IC27115	Имплантат JDIcon Ultra.S с винтом-заглушкой, диаметр 2.75 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 2.75 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 11.5 мм -0.10/-0.30 мм Масса: 0.176 г ± 10%
42	IC27130	Имплантат JDIcon Ultra.S с винтом-заглушкой, диаметр 2.75 мм, длина 13 мм	Диаметр: 2.75 мм 0.000/+0.050 мм Длина: 13 мм -0.10/-0.30 мм Масса: 0.209 г ± 10%
43	IC27150	Имплантат JDIcon Ultra.S с винтом-заглушкой, диаметр 2.75 мм, длина 15 мм	Диаметр: 2.75 мм 0.000/+0.050 мм Длина: 15 мм -0.10/-0.30 мм Масса: 0.229 г ± 10%
44	NA40200:	Имплантат с полированной шейкой JDNasal с винтом-заглушкой, диаметр 4.0 мм, длина 20 мм	Диаметр: 4.1 мм 0.000/+0.050 мм Длина: 20 мм ± 0.100 мм Масса: 0.80 г ± 10%
45	NA40220:	Имплантат с полированной шейкой JDNasal с винтом-заглушкой, диаметр 4.0 мм, длина 22 мм	Диаметр: 4.1 мм 0.000/+0.050 мм Длина: 22 мм ± 0.100 мм Масса: 0.90 г ± 10%
46	NA40240:	Имплантат с полированной шейкой JDNasal с винтом-заглушкой, диаметр 4.0 мм, длина 24 мм	Диаметр: 4.1 мм 0.000/+0.050 мм Длина: 24 мм ± 0.100 мм Масса: 1.00 г ± 10%
47	NA40260:	Имплантат с полированной шейкой JDNasal с винтом-заглушкой, диаметр 4.0 мм, длина 26 мм	Диаметр: 4.1 мм 0.000/+0.050 мм Длина: 26 мм ± 0.100 мм Масса: 1.1 г ± 10%
48	PT40130:	Имплантат с полированной шейкой JDPterygo с винтом-заглушкой, диаметр 4.0 мм, длина 13 мм	Диаметр: 4.0 мм 0.00/+0.10 мм Длина: 13 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.38 г ± 10%
49	PT40150:	Имплантат с полированной шейкой JDPterygo с винтом-заглушкой, диаметр 4.0 мм, длина 15 мм	Диаметр: 4.0 мм 0.00/+0.10 мм Длина: 15 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.43 г ± 10%
50	PT40180:	Имплантат с полированной шейкой JDPterygo с винтом-заглушкой, диаметр 4.0 мм, длина 18 мм	Диаметр: 4.0 мм 0.00/+0.10 мм Длина: 18 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.52 г ± 10%
51	PT40200:	Имплантат с полированной шейкой JDPterygo с винтом-заглушкой, диаметр 4.0 мм, длина 20 мм	Диаметр: 4.0 мм 0.00/+0.10 мм Длина: 20 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.60 г ± 10%
52	ZY43300:	Имплантат JDZygoma с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 30 мм	Диаметр: 4.3 мм ± 0.02 мм Длина: 30 мм ± 0.1 мм Масса: 1.65 г ± 10%
53	ZY43350:	Имплантат JDZygoma с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 35 мм	Диаметр: 4.3 мм ± 0.020 мм Длина: 35 мм ± 0.10 мм Масса: 1.98 г ± 10%
54	ZY43375:	Имплантат JDZygoma с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 37.5 мм	Диаметр: 4.3 мм ± 0.02 мм Длина: 37.5 мм ± 0.1 мм Масса: 2.14 г ± 10%
55	ZY43400:	Имплантат JDZygoma с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 40 мм	Диаметр: 4.3 мм ± 0.02 мм Длина: 40 мм ± 0.1 мм Масса: 2.30 г ± 10%
56	ZY43425:	Имплантат JDZygoma с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 42.5 мм	Диаметр: 4.3 мм ± 0.02 мм Длина: 42.5 мм ± 0.01 мм Масса: 2.47 г ± 10%
57	ZY43450:	Имплантат JDZygoma с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 45 мм	Диаметр: 4.3 мм ± 0.02 мм Длина: 45 мм ± 0.01 мм Масса: 2.63 г ± 10%
58	ZY43475:	Имплантат JDZygoma с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 47.5 мм	Диаметр: 4.3 мм ± 0.02 мм Длина: 47.5 мм ± 0.01 мм Масса: 2.79 г ± 10%
59	ZY43500:	Имплантат JDZygoma с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 50 мм	Диаметр: 4.3 мм ± 0.02 мм Длина: 50 мм ± 0.01 мм

			Масса: 2.96 г ± 10%
60	ZY43525:	Имплантат JDZygoma с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 52.5 мм	Диаметр: 4.3 мм ± 0.02 мм Длина: 52.5 мм ± 0.01 мм Масса: 3.12 г ± 10%
61	IC37080.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 8 мм	Диаметр: 3.76 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 8 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.19 г ± 10%
62	IC37100.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 10 мм	Диаметр: 3.76 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 10 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.24 г ± 10%
63	IC37115.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 3.76 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 11.5 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.26 г ± 10%
64	IC37130.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 13 мм	Диаметр: 3.76 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 13 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.32 г ± 10%
65	IC37150.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 15 мм	Диаметр: 3.76 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 15 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.37 г ± 10%
66	IC37180.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 18 мм	Диаметр: 3.74 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 18 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.48 г ± 10%
67	IC43060.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 6 мм	Диаметр: 4.1 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 6 мм 0.00/-0.10 мм Масса: 0.17 г ± 10%
68	IC43080.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 8 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 8 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.25 г ± 10%
69	IC43100.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 10 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 10 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.30 г ± 10%
70	IC43115.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 11.5 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.36 г ± 10%
71	IC43130.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 13 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 13 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.42 г ± 10%
72	IC43150.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 15 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 15 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.50 г ± 10%
73	IC43180.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 18 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 18 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.60 г ± 10%
74	IC50060.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 6 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 6 мм 0.00/-0.10 мм Масса: 0.29 г ± 10%
75	IC50080.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 8 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 8 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.37 г ± 10%
76	IC50010.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 10 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 10 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.46 г ± 10%
77	IC50115.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 11.5 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.55 г ± 10%
78	IC50130.	Имплантат JDIcon Plus F с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 13 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 13 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.60 г ± 10%

79	IC37080,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 8 мм	Диаметр: 3.76 мм +0.00/+0.05 мм Длина: 8 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.19 г ± 10%
80	IC37100,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 10 мм	Диаметр: 3.76 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 10 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.24 г ± 10%
81	IC37115,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 3.76 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 11.5 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.26 г ± 10%
82	IC37130,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 13 мм	Диаметр: 3.76 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 13 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.32 г ± 10%
83	IC37150,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 15 мм	Диаметр: 3.76 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 15 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.37 г ± 10%
84	IC37180,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 18 мм	Диаметр: 3.74 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 18 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.48 г ± 10%
85	IC43060,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 6 мм	Диаметр: 4.1 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 6 мм 0.00/-0.10 мм Масса: 0.17 г ± 10%
86	IC43080,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 8 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 8 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.25 г ± 10%
87	IC43100,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 10 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 10 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.30 г ± 10%
88	IC43115,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 11.5 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.36 г ± 10%
89	IC43130,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 13 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 13 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.42 г ± 10%
90	IC43150,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 15 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 15 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.50 г ± 10%
91	IC43180,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 18 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 18 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.60 г ± 10%
92	IC50060,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 6 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 6 мм 0.00/-0.10 мм Масса: 0.29 г ± 10%
93	IC50080,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 8 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 8 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.37 г ± 10%
94	IC50100,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 10 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 10 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.46 г ± 10%
95	IC50115,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 11.5 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.55 г ± 10%
96	IC50130,	Имплантат с полированной шейкой JDIcon Plus с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 13 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 13 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.60 г ± 10%
97	EV37080:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 8 мм	Диаметр: 3.76 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 8 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.164 г ± 10%
98	EV37100:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 10 мм	Диаметр: 3.76 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 10 мм -0.20/-0.40 мм

			Масса: 0.210 г ± 10%
99	EV37115:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 3.76 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 11.5 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.251 г ± 10%
100	EV37130:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 13 мм	Диаметр: 3.76 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 13 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.296 г ± 10%
101	EV37150:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 15 мм	Диаметр: 3.76 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 15 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.350 г ± 10%
102	EV37180:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 3.7 мм, длина 18 мм	Диаметр: 3.76 мм 0.00/+0.05 мм Длина: 18 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.481 г ± 10%
103	EV43060:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 6 мм	Диаметр: 4.3 мм 0/-0.02 мм Длина: 6 мм 0/-0.1 мм Масса: 0.173 г ± 10%
104	EV43080:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 8 мм	Диаметр: 4.3 мм 0/-0.02 мм Длина: 8 мм -0.2/-0.4 мм Масса: 0.241 г ± 10%
105	EV43100:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 10 мм	Диаметр: 4.3 мм 0/-0.02 мм Длина: 10 мм -0.2/-0.4 мм Масса: 0.293 г ± 10%
106	EV43115:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 4.3 мм 0/-0.02 мм Длина: 11.5 мм -0.2/-0.4 мм Масса: 0.354 г ± 10%
107	EV43130:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 13 мм	Диаметр: 4.3 мм 0/-0.02 мм Длина: 13 мм -0.2/-0.4 мм Масса: 0.411 г ± 10%
108	EV43150:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 15 мм	Диаметр: 4.3 мм 0.000/-0.020 мм Длина: 15 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.481 г ± 10%
109	EV43180:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 4.3 мм, длина 18 мм	Диаметр: 4.3 мм 0/-0.02 мм Длина: 18 мм -0.2/-0.4 мм Масса: 0.574 г ± 10%
110	EV50060:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 6 мм	Диаметр: 5 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 6 мм 0.00/-0.10 мм Масса: 0.235 г ± 10%
111	EV50080:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 8 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 8 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.290 г ± 10%
112	EV50100:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 10 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 10 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.418 г ± 10%
113	EV50115:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 11.5 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.481 г ± 10%
114	EV50130:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 13 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 13 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.583 г ± 10%
115	EV50150:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 5.0 мм, длина 15 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 15 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.695 г ± 10%
116	EV60060:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 6.0 мм, длина 6 мм	Диаметр: 6.0 мм 0/-0.02 мм Длина: 6 мм -0/-0.1 мм Масса: 0.371 г ± 10%
117	EV60080:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 6.0 мм, длина 8 мм	Диаметр: 6.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 8 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.470 г ± 10%

118	EV60100:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 6.0 мм, длина 10 мм	Диаметр: 6.0 мм 0.000/-0.020 мм Длина: 10 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.648 г ± 10%
119	EV60115:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 6.0 мм, длина 11.5 мм	Диаметр: 6.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 11.5 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.763 г ± 10%
120	EV60130:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 6.0 мм, длина 13 мм	Диаметр: 6.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 13 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 0.875 г ± 10%
121	EV60150:	Имплантат JDEvolution Plus с винтом-заглушкой, диаметр 6.0 мм, длина 15 мм	Диаметр: 6.0 мм 0.00/-0.02 мм Длина: 15 мм -0.20/-0.40 мм Масса: 1.055 г ± 10%
122	ICCA15C	Абатмент Мульти-юнит прямой JDIcon, высота 1.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.000/+0.040 мм Высота: 1.5 мм ± 0.05 мм Масса: 0.24 г ± 10%
123	ICCA30C	Абатмент Мульти-юнит прямой JDIcon, высота 3.0 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 3 мм ± 0.05 мм Масса: 0.35 г ± 10%
124	ICCA1725C	Абатмент Мульти-юнит угловой 17° JDIcon, высота 2.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 2.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.17 г ± 10%
125	ICCA1735C	Абатмент Мульти-юнит угловой 17° JDIcon, высота 3.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 3.5 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.27 г ± 10%
126	ICCA3025C	Абатмент Мульти-юнит угловой 30° JDIcon, высота 2.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 2.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.17 г ± 10%
127	ICCA3035C	Абатмент Мульти-юнит угловой 30° JDIcon, высота 3.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 3.5 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.19 г ± 10%
128	ICCA15C.	Абатмент Мульти-юнит прямой JDIcon Plus, высота 1.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 1.5 мм ± 0.05 мм Масса: 0.50 г ± 10%
129	ICCA30C.	Абатмент Мульти-юнит прямой JDIcon Plus, высота 3.0 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 3 мм ± 0.05 мм Масса: 0.35 г ± 10%
130	ICCA1725C.	Абатмент Мульти-юнит угловой 17° JDIcon Plus, высота 2.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0/+0.04 мм Высота: 2.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.17 г ± 10%
131	ICCA1735C.	Абатмент Мульти-юнит угловой 17° JDIcon Plus, высота 3.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 3.5 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.22 г ± 10%
132	ICCA3025C.	Абатмент Мульти-юнит угловой 30° JDIcon Plus, высота 2.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 2.85 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.17 г ± 10%
133	ICCA3035C.	Абатмент Мульти-юнит угловой 30° JDIcon Plus, высота 3.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 3.5 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.19 г ± 10%
134	EVNCA10C:	Абатмент Мульти-юнит прямой JDEvolution Plus, высота 1.0 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 1.0 мм ± 0.05 мм Масса: 0.18 г ± 10%
135	EVNCA15C:	Абатмент Мульти-юнит прямой JDEvolution Plus, высота 1.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 1.5 мм ± 0.05 мм Масса: 0,216 г ± 10%
136	EVNCA20C:	Абатмент Мульти-юнит прямой JDEvolution Plus, высота 2.0 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 2.0 мм ± 0.05 мм Масса: 0,25 г ± 10%
137	EVNCA30C:	Абатмент Мульти-юнит прямой JDEvolution Plus, высота 3.0 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 3.0 мм ± 0.05 мм

			Масса: 0,312 г ± 10%
138	EVNCA40C:	Абатмент Мульти-юнит прямой JDEvolution Plus, высота 4.0 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 4.0 мм ± 0.05 мм Масса: 0,37 г ± 10%
139	EVCA1725C:	Абатмент Мульти-юнит угловой 17° JDEvolution Plus, высота 2.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 2.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0,170 г ± 10%
140	EVCA1735C:	Абатмент Мульти-юнит угловой 17° JDEvolution Plus, высота 3.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.000/+0.040 мм Высота: 3.5 мм 0/-0.075 мм Масса: 0,219 г ± 10%
141	EVCA3025C:	Абатмент Мульти-юнит угловой 30° JDEvolution Plus, высота 2.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0/+0.04 мм Высота: 2.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0,165 г ± 10%
142	EVCA3035C:	Абатмент Мульти-юнит угловой 30° JDEvolution Plus, высота 3.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 3.5 мм 0/-0.075 мм Масса: 0,190 г ± 10%
143	EVCA4545C:	Абатмент Мульти-юнит угловой 45° JDEvolution Plus, высота 4.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 4.2 мм 0/-0.075 мм Масса 0,29 г ± 10%
144	EVCA6050C:	Абатмент Мульти-юнит угловой 60° JDEvolution Plus, высота 5.0 мм	Диаметр: 4.8 мм -0/+0.04 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Масса 0,35 г ± 10%
145	EVNCA15TSC:	Абатмент Мульти-юнит Tissue прямой JDEvolution Plus, высота 1.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 1.5 мм ± 0.05 мм Масса: 0,19 г ± 10%
146	EVNCA30TSC:	Абатмент Мульти-юнит Tissue прямой JDEvolution Plus, высота 3.0 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 3.0 мм ± 0.05 мм Масса: 0,26 г ± 10%
147	EVNCA40TSC:	Абатмент Мульти-юнит Tissue прямой JDEvolution Plus, высота 4.0 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 4.0 мм ± 0.05 мм Масса: 0,32 г ± 10%
148	EVNCA50TSC:	Абатмент Мульти-юнит Tissue прямой JDEvolution Plus, высота 5.0 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Высота: 5.0 мм ± 0.05 мм Масса: 0,37 г ± 10%
149	ICTAEC	Абатмент временный с захватом JDIcon	Диаметр: 4.8 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0,32 г ± 10%
150	ICTANEC	Абатмент временный без захвата JDIcon	Диаметр: 4.8 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.8 мм 0/-0.060 мм Масса: 0,29 г ± 10%
151	ICTANEWC	Абатмент временный без захвата для сварки JDIcon	Диаметр: 5 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.8 мм 0/-0.060 мм Масса: 0,490 г ± 10%
152	ISTAEC	Абатмент временный с захватом JDIcon Ultra.S	Диаметр: 3.3 мм -0.050/+0.000 мм Высота: 1.6 мм 0/-0.060 мм Масса: 0,144 г ± 10%
153	ICOATANEC.	Абатмент временный Octa JDIcon Plus без захвата	Диаметр: 4 мм 0/-0.075 мм Масса: 0,267 г ± 10%
154	EVTAECS:	Абатмент временный с захватом JDEvolution Plus	Диаметр: 4.25 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.975 мм 0/-0.060 мм Масса: 0,273 г ± 10%
155	EVTANEC:	Абатмент временный без захвата JDEvolution Plus	Диаметр: 4.25 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.065 мм 0/-0.060 мм Масса: 0,28 г ± 10%
156	EVTAEETSC:	Абатмент временный Tissue с захватом JDEvolution Plus	Диаметр: 4.25 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.025 мм 0/-0.060 мм Масса: 0,28 г ± 10%
157	EVTANETSC:	Абатмент временный Tissue без захвата JDEvolution Plus	Диаметр: 4.25 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.025 мм 0/-0.060 мм

			Масса: 0.27 г ± 10%
158	ICSA4520C	Абатмент прямой JDIcon, диаметр 4.5 мм, высота 2.0 мм	Диаметр: 4.5 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.26 г ± 10%
159	ICSA4540C	Абатмент прямой JDIcon, диаметр 4.5 мм, высота 4.0 мм	Диаметр: 4.5 мм 0/-0.075 мм Высота: 4.0 мм ±0.02 мм Масса: 0.34 г ± 10%
160	ICSA5020C	Абатмент прямой JDIcon, диаметр 5.0 мм, высота 2.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.0 мм ±0.02 мм Масса: 0.31 г ± 10%
161	ICSA5040C	Абатмент прямой JDIcon, диаметр 5.0 мм, высота 4.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 4.0 мм ±0.02 мм Масса: 0.40 г ± 10%
162	ICSA6020C	Абатмент прямой JDIcon, диаметр 6.0 мм, высота 2.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.0 мм ±0.02 мм Масса: 0.48 г ± 10%
163	ICSA6040C	Абатмент прямой JDIcon, диаметр 6.0 мм, высота 4.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 4.0 мм ±0.2 мм Масса: 0.62 г ± 10%
164	ISSA4020C	Абатмент прямой JDIcon Ultra.S, диаметр 4.0 мм, высота 2.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.0 мм ±0.02 мм Масса: 0.200 г ± 10%
165	ISSA4040C	Абатмент прямой JDIcon Ultra.S, диаметр 4.0 мм, высота 4.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0.000/-0.050 мм Высота: 4.0 мм ±0.02 мм Масса: 0.277 г ± 10%
166	ICSA4520C.	Абатмент прямой с захватом JDIcon Plus, диаметр 4.5 мм, высота 2.0 мм	Диаметр: 4.5 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.38 г ± 10%
167	ICSA4520NEC.	Абатмент прямой без захвата JDIcon Plus, диаметр 4.5 мм, высота 2.0 мм	Диаметр: 4.5 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.30 г ± 10%
168	ICSA4540C.	Абатмент прямой с захватом JDIcon Plus, диаметр 4.5 мм, высота 4.0 мм	Диаметр: 4.5 мм 0/-0.075 мм Высота: 4.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.38 г ± 10%
169	ICSA4540NEC.	Абатмент прямой без захвата JDIcon Plus, диаметр 4.5 мм, высота 4.0 мм	Диаметр: 4.5 мм 0/-0.075 мм Высота: 4.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.38 г ± 10%
170	ICSA5020C.	Абатмент прямой с захватом JDIcon Plus, диаметр 5.0 мм, высота 2.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.32 г ± 10%
171	ICSA5020NEC.	Абатмент прямой без захвата JDIcon Plus, диаметр 5.0 мм, высота 2.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.32 г ± 10%
172	ICSA5040C.	Абатмент прямой с захватом JDIcon Plus, диаметр 5.0 мм, высота 4.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 4.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.47 г ± 10%
173	ICSA5040NEC.	Абатмент прямой без захвата JDIcon Plus, диаметр 5.0 мм, высота 4.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 4.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.42 г ± 10%
174	ICSA6020C.	Абатмент прямой с захватом JDIcon Plus, диаметр 6.0 мм, высота 2.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.52 г ± 10%
175	ICSA6040C.	Абатмент прямой с захватом JDIcon Plus, диаметр 6.0 мм, высота 4.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 4.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.67 г ± 10%
176	ICEXA5520C.	Абатмент прямой Extra JDIcon Plus диаметр 5.5 мм, высота 2.0 мм	Диаметр: 5.5 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.40 г ± 10%

177	ICEXA5540C.	Абатмент прямой Extra JDIcon Plus диаметр 5.5 мм, высота 4.0 мм	Диаметр: 5.5 мм 0/-0.075 мм Высота: 4.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.53 г ± 10%
178	EVNSA4520C:	Абатмент прямой JDEvolution Plus, диаметр 4.5 мм, высота 2.0 мм	Диаметр: 4.5 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.254 г ± 10%
179	EVNSA4540C:	Абатмент прямой JDEvolution Plus, диаметр 4.5 мм, высота 4.0 мм	Диаметр: 4.5 мм 0/-0.075 мм Высота: 4.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.254 г ± 10%
180	EVNSA5020C:	Абатмент прямой JDEvolution Plus, диаметр 5.0 мм, высота 2.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.307 г ± 10%
181	EVNSA5040C:	Абатмент прямой JDEvolution Plus, диаметр 5.0 мм, высота 4.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 4.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.407 г ± 10%
182	EVNSA6020C:	Абатмент прямой JDEvolution Plus, диаметр 6.0 мм, высота 2.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.489 г ± 10%
183	EVNSA6040C:	Абатмент прямой JDEvolution Plus, диаметр 6.0 мм, высота 4.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 4.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.639 г ± 10%
184	EVNSA5020TSC :	Абатмент прямой Tissue JDEvolution Plus, диаметр 5.0 мм, высота 2.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 2.05 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.28 г ± 10%
185	EVNSA5040TSC :	Абатмент прямой Tissue JDEvolution Plus, диаметр 5.0 мм, высота 4.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 4.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.37 г ± 10%
186	ICEA15C	Абатмент анатомический JDIcon, высота 1.5 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.51 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.30 г ± 10%
187	ICEA30C	Абатмент анатомический JDIcon, высота 3.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.37 г ± 10%
188	IC15A15C	Абатмент анатомический угловой 15° JDIcon, высота 1.5 мм	Диаметр: 5.5 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.42 г ± 10%
189	IC15A30C	Абатмент анатомический угловой 15° JDIcon, высота 3.0 мм	Диаметр: 5.5 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.51 г ± 10%
190	IC25A15C	Абатмент анатомический угловой 25° JDIcon, высота 1.5 мм	Диаметр: 5.5 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.44 г ± 10%
191	IC25A30C	Абатмент анатомический угловой 25° JDIcon, высота 3.0 мм	Диаметр: 5.5 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.54 г ± 10%
192	IC15A15C.	Абатмент анатомический угловой 15° JDIcon Plus, высота 1.5 мм	Диаметр: 5 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.37 г ± 10%
193	IC15A30C.	Абатмент анатомический угловой 15° JDIcon Plus, высота 3.0 мм	Диаметр: 5 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.45 г ± 10%
194	IC25A15C.	Абатмент анатомический угловой 25° JDIcon Plus, высота 1.5 мм	Диаметр: 5 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.38 г ± 10%
195	IC25A30C.	Абатмент анатомический угловой 25° JDIcon Plus, высота 3.0 мм	Диаметр: 5 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.46 г ± 10%
196	EVEA15:	Абатмент анатомический JDEvolution Plus, высота 1.5 мм	Диаметр: 5 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм

			Масса: 0.272 г ± 10%
197	EVEA30:	Абатмент анатомический JDEvolution Plus, высота 3.0 мм	Диаметр: 5 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.371 г ± 10%
198	EV15A15:	Абатмент анатомический угловой 15° JDEvolution Plus, высота 1.5 мм	Диаметр: 5 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.364 г ± 10%
199	EV15A15N:	Абатмент анатомический угловой 15° JDEvolution Plus, диаметр 4.5 мм высота 1.5 мм	Диаметр: 4.6 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.364 г ± 10%
200	EV15A30:	Абатмент анатомический угловой 15° JDEvolution Plus, высота 3.0 мм	Диаметр: 5 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.450 г ± 10%
201	EV15A30N:	Абатмент анатомический угловой 15° JDEvolution Plus, диаметр 4.5 мм высота 3.0 мм	Диаметр: 4.6 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.450 г ± 10%
202	EV25A15:	Абатмент анатомический угловой 25° JDEvolution Plus, высота 1.5 мм	Диаметр: 5 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.378 г ± 10%
203	EV25A30:	Абатмент анатомический угловой 25° JDEvolution Plus, высота 3.0 мм	Диаметр: 5 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.465 г ± 10%
204	ICBA15	Абатмент шаровидный JDIcon, высота 1.5 мм	Диаметр: 3.7 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.20 г ± 10%
205	ICBA30	Абатмент шаровидный JDIcon, высота 3.0 мм	Диаметр: 3.7 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.20 г ± 10%
206	ICBA50	Абатмент шаровидный JDIcon, высота 5.0 мм	Диаметр: 3.7 мм 0/-0.075 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.20 г ± 10%
207	ISBA15	Абатмент шаровидный JDIcon Ultra.S, высота 1.5 мм	Диаметр: 2.7 мм 0.000/-0.050 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.11 г ± 10%
208	ISBA30	Абатмент шаровидный JDIcon Ultra.S, высота 3.0 мм	Диаметр: 2.7 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.14 г ± 10%
209	ISBA50	Абатмент шаровидный JDIcon Ultra.S, высота 5.0 мм	Диаметр: 2.7 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.20 г ± 10%
210	ICBA15.	Абатмент шаровидный JDIcon Plus, высота 1.5 мм	Диаметр: 4 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.18 г ± 10%
211	ICBA30.	Абатмент шаровидный JDIcon Plus, высота 3.0 мм	Диаметр: 4 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.24 г ± 10%
212	ICBA50.	Абатмент шаровидный JDIcon Plus, высота 5.0 мм	Диаметр: 4 мм 0/-0.075 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.33 г ± 10%
213	EVBA15:	Абатмент шаровидный JDEvolution Plus, высота 1.5 мм	Диаметр: 4 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.177 г ± 10%
214	EVBA30:	Абатмент шаровидный JDEvolution Plus, высота 3.0 мм	Диаметр: 4 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.177 г ± 10%
215	EVBA50:	Абатмент шаровидный JDEvolution Plus, высота 5.0 мм	Диаметр: 4 мм 0/-0.075 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.364 г ± 10%
216	ICEMI15	Абатмент Emi JDIcon, высота 1.5 мм	Диаметр: 3.7 мм 0/-0.075 мм

			Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.19 г ± 10%
217	ICEMI30	Абатмент Emi JDIcon, высота 3.0 мм	Диаметр: 3.7 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.19 г ± 10%
218	ICEMI50	Абатмент Emi JDIcon, высота 5.0 мм	Диаметр: 3.7 мм 0/-0.075 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.19 г ± 10%
219	ICEMI15.	Абатмент Emi JDIcon Plus, высота 1.5 мм	Диаметр: 3.7 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.16 г ± 10%
220	ICEMI30.	Абатмент Emi JDIcon Plus, высота 3.0 мм	Диаметр: 3.7 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.22 г ± 10%
221	ICEMI50.	Абатмент Emi JDIcon Plus, высота 5.0 мм	Диаметр: 3.7 мм 0/-0.075 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.30 г ± 10%
222	EVEMI15:	Абатмент Emi JDEvolution Plus, высота 1.5 мм	Диаметр: 3.7 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.162 г ± 10%
223	EVEMI30:	Абатмент Emi JDEvolution Plus, высота 3.0 мм	Диаметр: 3.7 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.162 г ± 10%
224	EVEMI50:	Абатмент Emi JDEvolution Plus, высота 5.0 мм	Диаметр: 3.7 мм 0/-0.075 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.162 г ± 10%
225	ICGP40C	Абатмент GP JDIcon, диаметр 4.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.30 г ± 10%
226	ICGP50C	Абатмент GP JDIcon, диаметр 5.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.44 г ± 10%
227	ICGP60C	Абатмент GP JDIcon, диаметр 6.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.75 г ± 10%
228	ISGP32C	Абатмент GP JDIcon Ultra.S, диаметр 3.2 мм	Диаметр: 3.2 мм 0.000/-0.050 мм Масса: 0.191 г ± 10%
229	ISGP40C	Абатмент GP JDIcon Ultra.S, диаметр 4.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0.000/-0.050 мм Масса: 0.309 г ± 10%
230	IS15GPA40C	Абатмент GP угловой 15°, JDIcon Ultra.S, диаметр 4.0 мм	Диаметр: 4.0 мм -0.00/-0.05 мм Масса: 0.266 г ± 10%
231	ICGP40C.	Абатмент GP JDIcon Plus, диаметр 4.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.40 г ± 10%
232	ICGP50C.	Абатмент GP JDIcon Plus, диаметр 5.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.52 г ± 10%
233	ICGP60C.	Абатмент GP JDIcon Plus, диаметр 6.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.85 г ± 10%
234	EVGPA40EC:	Абатмент GP с захватом JDEvolution Plus, диаметр 4.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.28 г ± 10%
235	EVGPA40NEC:	Абатмент GP без захвата JDEvolution Plus, диаметр 4.0 мм	Диаметр: 4.0 мм ± 0.05 мм Масса: 0.259 г ± 10%
236	EVGPAEC:	Абатмент GP с захватом JDEvolution Plus, диаметр 5.0 мм	Диаметр: 4.9 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.448 г ± 10%
237	EVGPA50NEC:	Абатмент GP без захвата JDEvolution Plus, диаметр 5.0 мм	Диаметр: 4.9 мм ± 0.05 мм Масса: 0.42 г ± 10%
238	EVGPA60EC:	Абатмент GP с захватом JDEvolution Plus, диаметр 6.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.816 г ± 10%
239	EVCAGPAEC	Абатмент GP абатмента Мульти-юнит с захватом JDEvolution	Диаметр: 4.8 мм ± 0.02 мм Масса: 0.29 г ± 10%
240	EVCAGPANEC	Абатмент GP абатмента Мульти-юнит без захвата JDEvolution	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 Масса: 0.29 г ± 10%

241	EVCAGPAEC:	Абатмент GP абатмента Мульти-юнит с захватом JDEvolution Plus	Диаметр: 4.8 мм ± 0.02 мм Масса: 0.29 г $\pm 10\%$
242	EVCAGPANEC:	Абатмент GP абатмента Мульти-юнит без захвата JDEvolution Plus	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Масса: 0.29 г $\pm 10\%$
243	ICOA15.	Абатмент Octa JDIcon Plus, высота 1.5 мм	Диаметр: 3.8 мм 0.00/-0.03 мм Высота: 1.5 мм ± 0.05 мм Масса: 0.17 г $\pm 10\%$
244	ICOA30.	Абатмент Octa JDIcon Plus, высота 3.0 мм	Диаметр: 3.8 мм 0.00/-0.03 мм Высота: 3.0 мм ± 0.05 мм Масса: 0.23 г $\pm 10\%$
245	ICOA40.	Абатмент Octa JDIcon Plus, высота 4.0 мм	Диаметр: 3.8 мм 0.00/-0.03 мм Высота: 4.0 мм ± 0.05 мм Масса: 0.27 г $\pm 10\%$
246	EVRA15C:	Абатмент Rapid с заживляющим колпачком и трансфером JDEvolution Plus, высота 1.5 мм	Диаметр: 5 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.220 г $\pm 10\%$
247	EVRA30C:	Абатмент Rapid с заживляющим колпачком и трансфером JDEvolution Plus, высота 3.0 мм	Диаметр: 5 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.297 г $\pm 10\%$
248	EVRA15D:	Абатмент Rapid без заживляющего колпачка и трансфера JDEvolution Plus, высота 1.5 мм	Диаметр: 5 мм 0/-0.075 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.220 г $\pm 10\%$
249	EVRA30D:	Абатмент Rapid без заживляющего колпачка и трансфера JDEvolution Plus, высота 3.0 мм	Диаметр: 5 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.297 г $\pm 10\%$
250	ICHA43	Формирователь десны JDIcon, диаметр 4.0 мм, высота 3.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8.3 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.23 г $\pm 10\%$
251	ICHA45	Формирователь десны JDIcon, диаметр 4.0 мм, высота 5.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 10.3 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.34 г $\pm 10\%$
252	ICHA47	Формирователь десны JDIcon, диаметр 4.0 мм, высота 7.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 7.0 мм 0/-0.090 мм Общая длина: 12.3 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.45 г $\pm 10\%$
253	ICHA53	Формирователь десны JDIcon, диаметр 5.0 мм, высота 3.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8.3 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.27 г $\pm 10\%$
254	ICHA55	Формирователь десны JDIcon, диаметр 5.0 мм, высота 5.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 10.3 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.43 г $\pm 10\%$
255	ICHA57	Формирователь десны JDIcon, диаметр 5.0 мм, высота 7.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 7.0 мм 0/-0.090 мм Общая длина: 12.3 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.59 г $\pm 10\%$
256	ICHA59	Формирователь десны JDIcon, диаметр 5.0 мм, высота 9.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 9.0 мм 0/-0.090 мм Общая длина: 14.3 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.76 г $\pm 10\%$
257	ICHA63	Формирователь десны JDIcon, диаметр 6.0 мм, высота 3.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8.3 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.32 г $\pm 10\%$
258	ICHA65	Формирователь десны JDIcon, диаметр 6.0 мм, высота 5.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0.000/-0.050 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм

			Общая длина: 10.3 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.55 г ± 10%
259	ICHA67	Формирователь десны JDIcon, диаметр 6.0 мм, высота 7.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 7.0 мм 0/-0.090 мм Общая длина: 12.3 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.74 г ± 10%
260	ISHA323	Формирователь десны JDIcon Ultra.S, диаметр 3.2 мм, высота 3.0 мм	Диаметр: 3.2 мм 0.000/-0.050 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 7.8 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.117 г ± 10%
261	ISHA325	Формирователь десны JDIcon Ultra.S, диаметр 3.2 мм, высота 5.0 мм	Диаметр: 3.2 мм 0.000/-0.050 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 9.8 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.117 г ± 10%
262	ISHA327	Формирователь десны JDIcon Ultra.S, диаметр 3.2 мм, высота 7.0 мм	Диаметр: 3.2 мм 0.000/-0.050 мм Высота: 7.0 мм 0/-0.090 мм Общая длина: 11.8 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.117 г ± 10%
263	ISHA403	Формирователь десны JDIcon Ultra.S, диаметр 4.0 мм, высота 3.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0.000/-0.050 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 7.8 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.150 г ± 10%
264	ISHA405	Формирователь десны JDIcon Ultra.S, диаметр 4.0 мм, высота 5.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 9.8 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.150 г ± 10%
265	ISHA407	Формирователь десны JDIcon Ultra.S, диаметр 4.0 мм, высота 7.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0.000/-0.050 мм Высота: 7.0 мм 0/-0.090 мм Общая длина: 11.8 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.150 г ± 10%
266	ICHA43.	Формирователь десны JDIcon Plus, диаметр 4.0 мм, высота 3.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 7.85 мм ± 0.05 мм Масса: 0.20 г ± 10%
267	ICHA45.	Формирователь десны JDIcon Plus, диаметр 4.0 мм, высота 5.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 9.85 мм ± 0.05 мм Масса: 0.30 г ± 10%
268	ICHA47.	Формирователь десны JDIcon Plus, диаметр 4.0 мм, высота 7.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 7.0 мм 0/-0.090 мм Общая длина: 11.85 мм ± 0.05 мм Масса: 0.39 г ± 10%
269	ICHA53.	Формирователь десны JDIcon Plus, диаметр 5.0 мм, высота 3.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 7.85 мм ± 0.05 мм Масса: 0.26 г ± 10%
270	ICHA55.	Формирователь десны JDIcon Plus, диаметр 5.0 мм, высота 5.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 9.85 мм ± 0.05 мм Масса: 0.37 г ± 10%
271	ICHA57.	Формирователь десны JDIcon Plus, диаметр 5.0 мм, высота 7.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 7.0 мм 0/-0.090 мм Общая длина: 11.85 мм ± 0.05 мм Масса: 0.48 г ± 10%
272	ICHA63.	Формирователь десны JDIcon Plus, диаметр 6.0 мм, высота 3.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 7.85 мм ± 0.05 мм Масса: 0.34 г ± 10%
273	ICHA65.	Формирователь десны JDIcon Plus, диаметр 6.0 мм, высота 5.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм

			Общая длина: 9.85 мм ± 0.05 мм Масса: 0.46 г ± 10%
274	ICHA67.	Формирователь десны JDIcon Plus, диаметр 6.0 мм, высота 7.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 7.0 мм 0/-0.090 мм Общая длина: 11.85 мм ± 0.05 мм Масса: 0.59 г ± 10%
275	ICHA753.	Формирователь десны JDIcon Plus, диаметр 7.5 мм, высота 3.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 7.0 мм 0/-0.090 мм Общая длина: 7.85 мм ± 0.05 мм Масса: 0.45 г ± 10%
276	ICHA755.	Формирователь десны JDIcon Plus, диаметр 7.5 мм, высота 5.0 мм	Диаметр: 7.5 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 9.85 мм ± 0.05 мм Масса: 0.63 г ± 10%
277	EVHA43:	Формирователь десны JDEvolution Plus, диаметр 4.0 мм, высота 3.0 мм	Диаметр: 4.0 мм -0.05/-0.08 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.203 г ± 10%
278	EVHA45:	Формирователь десны JDEvolution Plus, диаметр 4.0 мм, высота 5.0 мм	Диаметр: 4.0 мм -0.05/-0.08 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 10 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.308 г ± 10%
279	EVHA47:	Формирователь десны JDEvolution Plus, диаметр 4.0 мм, высота 7.0 мм	Диаметр: 4.0 мм -0.05/-0.08 мм Высота: 7.0 мм 0/-0.090 мм Общая длина: 12 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.414 г ± 10%
280	EVHA53:	Формирователь десны JDEvolution Plus, диаметр 5.0 мм, высота 3.0 мм	Диаметр: 5.0 мм -0.05/-0.08 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.265 г ± 10%
281	EVHA55:	Формирователь десны JDEvolution Plus, диаметр 5.0 мм, высота 5.0 мм	Диаметр: 5.0 мм -0.05/-0.08 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 10 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.417 г ± 10%
282	EVHA57:	Формирователь десны JDEvolution Plus, диаметр 5.0 мм, высота 7.0 мм	Диаметр: 5.0 мм -0.05/-0.08 мм Высота: 7.0 мм 0/-0.090 мм Общая длина: 12 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.567 г ± 10%
283	EVHA59:	Формирователь десны JDEvolution Plus, диаметр 5.0 мм, высота 9.0 мм	Диаметр: 5.0 мм -0.05/-0.08 мм Высота: 9.0 мм 0/-0.090 мм Общая длина: 14 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.73 г ± 10%
284	EVHA63:	Формирователь десны JDEvolution Plus, диаметр 6.0 мм, высота 3.0 мм	Диаметр: 6.0 мм -0.05/-0.08 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.336 г ± 10%
285	EVHA65:	Формирователь десны JDEvolution Plus, диаметр 6.0 мм, высота 5.0 мм	Диаметр: 6.0 мм -0.05/-0.08 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 10 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.543 г ± 10%
286	EVHA67:	Формирователь десны JDEvolution Plus, диаметр 6.0 мм, высота 7.0 мм	Диаметр: 6.0 мм -0.05/-0.08 мм Высота: 7.0 мм 0/-0.090 мм Общая длина: 12 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.750 г ± 10%
287	EVHA753:	Формирователь десны JDEvolution Plus, диаметр 7.5 мм, высота 3.0 мм	Диаметр: 7.5 мм 0/-0.090 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8 мм ± 0.05 мм Масса: 0.45 г ± 10%
288	EVHA755:	Формирователь десны JDEvolution Plus, диаметр 7.5 мм, высота 5.0 мм	Диаметр: 7.5 мм 0/-0.090 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм

			Общая длина: 10 мм ± 0.050 мм Масса: 0.77 г ± 10%
289	EVHA54TS:	Формирователь десны Tissue JDEvolution Plus, диаметр 5.0 мм, высота 4.0 мм	Диаметр: 5.0 мм -0.08/-0.05 мм Высота: 4.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 9 мм 0/-0.90 мм Масса: 0.30 г ± 10%
290	EVHA56TS:	Формирователь десны Tissue JDEvolution Plus, диаметр 5.0 мм, высота 6.0 мм	Диаметр: 5.0 мм -0.08/-0.05 мм Высота: 6.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 11 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.41 г ± 10%
291	ICHA53B	Формирователь десны для мостовидного протеза JDIcon, диаметр 5.0 мм, высота 3.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8.3 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.28 г ± 10%
292	ICHA55B	Формирователь десны для мостовидного протеза JDIcon, диаметр 5.0 мм, высота 5.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 10.3 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.43 г ± 10%
293	ICHA57B	Формирователь десны для мостовидного протеза JDIcon, диаметр 5.0 мм, высота 7.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0.00/-0.05 мм Высота: 7.0 мм 0/-0.090 мм Общая длина: 12.3 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.57 г ± 10%
294	EVCAICOTEC	Трансфер для открытой ложки Мульти-юнит с захватом JDEvolution	Диаметр (широкая часть): 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Общая длина: 10.5 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.52 г ± 10%
295	EVCAICOTC	Трансфер для открытой ложки Мульти-юнит JDEvolution	Диаметр (широкая часть): 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Общая длина: 10.5 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.29 г ± 10%
296	EVCAICOTLC	Трансфер для открытой ложки длинный Мульти-юнит JDEvolution	Диаметр (широкая часть): 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Общая длина: 12 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.51 г ± 10%
297	EVCAICCTC	Трансфер для закрытой ложки Мульти-юнит JDEvolution	Диаметр (широкая часть): 4.8 мм 0.000/+0.040 мм Общая длина: 8 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.29 г ± 10%
298	EVEMIIC	Трансфер пластиковый для абатмента Emi JDEvolution	Диаметр (широкая часть): 3.7 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 8.68 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.08 г ± 0.01 г
299	EVEMIICS	Трансфер стальной для абатмента Emi JDEvolution	Диаметр (широкая часть): 4.58 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 5.55 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.23 г ± 0.01 г
300	ICICOT4C	Трансфер для открытой ложки JDIcon, диаметр 4.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 13.35 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.75 г ± 10%
301	ICICOT5C	Трансфер для открытой ложки JDIcon, диаметр 5.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 13.35 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.89 г ± 10%
302	ICICOT6C	Трансфер для открытой ложки JDIcon, диаметр 6.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 13.35 мм 0/-0.110 мм Масса: 1.08 г ± 10%
303	ICICOTNEC	Трансфер для открытой ложки под мостовидные протезы JDIcon	Диаметр: 3.9 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 11.5 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.78 г ± 10%

304	ICICCT4C	Трансфер для закрытой ложки JDIcon, диаметр 4.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 12.35 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.62 г ± 10%
305	ICICCT5C	Трансфер для закрытой ложки JDIcon, диаметр 5.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 12.35 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.86 г ± 10%
306	ICICCT6C	Трансфер для закрытой ложки JDIcon, диаметр 6.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 12.35 мм 0/-0.110 мм Масса: 1.00 г ± 10%
307	ISICOT32C	Трансфер для открытой ложки JDIcon Ultra.S, диаметр 3.2 мм	Диаметр: 3.2 мм -0.050/0.000 мм Общая длина: 13.25 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.315 г ± 10%
308	ISICOT40C	Трансфер для открытой ложки JDIcon Ultra.S, диаметр 4.0 мм	Диаметр: 4.0 мм -0.050/0.000 мм Общая длина: 13.25 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.417 г ± 10%
309	ISICCT32C	Трансфер для закрытой ложки JDIcon Ultra.S, диаметр 3.2 мм	Диаметр: 3.2 мм -0.050/0.000 мм Общая длина: 12.25 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.30 г ± 10%
310	ISICCT40C	Трансфер для закрытой ложки JDIcon Ultra.S, диаметр 4.0 мм	Диаметр: 4.0 мм -0.050/0.000 мм Общая длина: 12.25 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.22 г ± 10%
311	ICICOT4C.	Трансфер для открытой ложки JDIcon Plus, диаметр 4.0 мм	Диаметр: 4.0 мм -0.10/-0.20 мм Общая длина: 14.4 мм ± 0.05 мм Масса: 0.343 г ± 10%
312	ICICOT5C.	Трансфер для открытой ложки JDIcon Plus, диаметр 5.0 мм	Диаметр: 5.0 мм -0.10/-0.20 мм Общая длина: 14.4 мм ± 0.05 мм Масса: 0.50 г ± 10%
313	ICICOT6C.	Трансфер для открытой ложки JDIcon Plus, диаметр 6.0 мм	Диаметр: 6.0 мм -0.10/-0.20 мм Общая длина: 14.4 мм ± 0.05 мм Масса: 0.75 г ± 10%
314	ICICCT4C.	Трансфер для закрытой ложки JDIcon Plus, диаметр 4.0 мм	Диаметр: 4.0 мм -0.10/-0.20 мм Общая длина: 14.4 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.318 г ± 10%
315	ICICCT5C.	Трансфер для закрытой ложки JDIcon Plus, диаметр 5.0 мм	Диаметр: 5.0 мм -0.10/-0.20 мм Общая длина: 14.4 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.481 г ± 10%
316	ICICCT6C.	Трансфер для закрытой ложки JDIcon Plus, диаметр 6.0 мм	Диаметр: 6.0 мм -0.10/-0.20 мм Общая длина: 14.4 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.555 г ± 10%
317	ICICCT1C.	Трансфер JDIcon Plus Direct Press Fit для закрытой ложки	Диаметр: 4.9 мм ± 0.02 мм Общая длина: 16.3 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.673 г ± 10%
318	ICOAICOTC.	Трансфер для абатмента Octa JDIcon Plus для открытой ложки	Диаметр: 4 мм -0.02/0.00 мм Общая длина: 12 мм ± 0.05 мм Масса: 0.271 г ± 10%
319	EVICOT4C:	Трансфер для открытой ложки JDEvolution Plus, диаметр 4.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 12.475 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.480 г ± 10%
320	EVICOT5C:	Трансфер для открытой ложки JDEvolution Plus, диаметр 5.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 12.475 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.557 г ± 10%
321	EVICOT6C:	Трансфер для открытой ложки JDEvolution Plus, диаметр 6.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 12.475 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.700 г ± 10%
322	EVICOTNEC:	Трансфер для открытой ложки без захвата JDEvolution Plus	Диаметр: 3.9 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 11.55 мм 0/-0.110 мм

			Масса: 0.43 г ± 10%
323	EVICCT4C:	Трансфер для закрытой ложки JDEvolution Plus, диаметр 4.0 мм	Диаметр: 4.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 12.275 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.388 г ± 10%
324	EVICCT5C:	Трансфер для закрытой ложки JDEvolution Plus, диаметр 5.0 мм	Диаметр: 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 12.275 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.470 г ± 10%
325	EVICCT6C:	Трансфер для закрытой ложки JDEvolution Plus, диаметр 6.0 мм	Диаметр: 6.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 12.28 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.566 г ± 10%
326	EVICCT1C:	Трансфер JDEvolution Plus Direct Press Fit для закрытой ложки	Диаметр: 4.9 мм ± 0.020 мм Общая длина: 16.3 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.621 г ± 10%
327	EVCAICOTEC:	Трансфер JDEvolution Plus Мульти-юнит для открытой ложки с захватом	Диаметр (широкая часть): 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Общая длина: 10.5 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.52 г ± 10%
328	EVCAICOTC:	Трансфер JDEvolution Plus Мульти-юнит для открытой ложки	Диаметр (широкая часть): 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Общая длина: 10.5 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.29 г ± 10%
329	EVCAICOTLC:	Трансфер JDEvolution Plus Мульти-юнит для открытой ложки длинный	Диаметр (широкая часть): 4.8 мм 0.00/+0.04 мм Общая длина: 12 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.51 г ± 10%
330	EVICOT5TSC:	Трансфер Tissue JDEvolution Plus для открытой ложки, диаметр 5.0 мм	Диаметр (широкая часть): 5.0 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 12.475 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.466 г ± 10%
331	EVCAITEC	Интерфейс CAD CAM с захватом для абатмента Мульти-юнит JDEvolution, высота 7.5 мм	Общая длина: 7.5 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.17 г ± 10%
332	EVCAITC	Интерфейс CAD CAM без захвата для абатмента Мульти-юнит JDEvolution, высота 7.5 мм	Общая длина: 7.3 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.16 г ± 10%
333	EVCATIBC	Интерфейс CAD CAM без захвата для абатмента Мульти-юнит JDEvolution, высота 5 мм	Общая длина: 5 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.10 г ± 10%
334	ICOAITC.	Интерфейс для абатмента Octa CAD CAM JDIcon Plus	Общая длина: 7.3 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.15 г ± 10%
335	EVCAITEC:	Интерфейс CAD CAM с захватом для абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus, высота 7.5 мм	Общая длина: 7.5 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.17 г ± 10%
336	EVCAITC:	Интерфейс CAD CAM без захвата для абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus, высота 7.5 мм	Общая длина: 7.3 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.16 г ± 10%
337	EVCATIBC:	Интерфейс CAD CAM без захвата для абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus, высота 5 мм	Общая длина: 5 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.10 г ± 10%
338	ICTIBC	Титановое основание с захватом JDIcon, высота 0.5 мм	Общая длина: 7.8 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.125 г ± 10%
339	ICTIBNEC	Титановое основание без захвата JDIcon, высота 0.5 мм	Общая длина: 5.95 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.105 г ± 10%
340	ICTIB15C	Титановое основание с захватом JDIcon, высота 1.5 мм	Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8.55 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.149 г ± 10%
341	ICTIB15NEC	Титановое основание без захвата JDIcon, высота 1.5 мм	Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 6.7 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.134 г ± 10%
342	ICTIB30C	Титановое основание с захватом JDIcon, высота 3.0 мм	Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 10.05 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.204 г ± 10%

343	ICTIB30NEC	Титановое основание без захвата JDIcon, высота 3.0 мм	Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8.2 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.194 г ± 10%
344	ICTIBC.	Титановое основание с захватом JDIcon Plus, высота 0.5 мм	Высота: 0.5 мм ± 10% Общая длина: 7.8 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.15 г ± 10%
345	ICTIBNEC.	Титановое основание без захвата JDIcon Plus, высота 0.5 мм	Высота: 0.5 мм ± 10% Общая длина: 7.8 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.14 г ± 10%
346	ICTIB15C.	Титановое основание с захватом JDIcon Plus, высота 1.5 мм	Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8.5 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.16 г ± 10%
347	ICTIB15NEC.	Титановое основание без захвата JDIcon Plus, высота 1.5 мм	Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8.5 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.16 г ± 10%
348	ICTIB30C.	Титановое основание с захватом JDIcon Plus, высота 3.0 мм	Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 10.0 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.20 г ± 10%
349	ICTIB30NEC.	Титановое основание без захвата JDIcon Plus, высота 3.0 мм	Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 10.0 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.20 г ± 10%
350	ICTIBNC.	Титановое основание длинное с захватом JDIcon Plus, высота 0.5 мм	Высота: 0.5 мм ± 10% Общая длина: 10.8 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.21 г ± 10%
351	ICTIBNENC.	Титановое основание длинное без захвата JDIcon Plus, высота 0.5 мм	Высота: 0.5 мм ± 10% Общая длина: 10.8 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.21 г ± 10%
352	ICTIB15NC.	Титановое основание длинное с захватом JDIcon Plus, высота 1.5 мм	Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 11.5 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.23 г ± 10%
353	ICTIB15NENC.	Титановое основание длинное без захвата JDIcon Plus, высота 1.5 мм	Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 11.5 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.23 г ± 10%
354	ICTIB30NC.	Титановое основание длинное с захватом JDIcon Plus, высота 3.0 мм	Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 13 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.27 г ± 10%
355	ICTIB30NENC.	Титановое основание длинное без захвата JDIcon Plus, высота 3.0 мм	Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 13 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.27 г ± 10%
356	ICEXTIBC.	Титановое основание Extra с захватом JDIcon Plus, высота 0.5 мм	Высота: 0.5 мм ± 10% Общая длина: 7.8 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.15 г ± 10%
357	ICEXTIBNEC.	Титановое основание Extra без захвата JDIcon Plus, высота 0.5 мм	Высота: 0.5 мм ± 10% Общая длина: 7.8 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.15 г ± 10%
358	ICEXTIB15C.	Титановое основание Extra с захватом JDIcon Plus, высота 1.5 мм	Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8.5 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.17 г ± 10%
359	ICEXTIB15NEC.	Титановое основание Extra без захвата JDIcon Plus, высота 1.5 мм	Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8.5 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.17 г ± 10%
360	ICEXTIB30C.	Титановое основание Extra с захватом JDIcon Plus, высота 3.0 мм	Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 10 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.22 г ± 10%
361	ICEXTIB30NEC.	Титановое основание Extra без захвата JDIcon Plus, высота 3.0 мм	Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 10 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.21 г ± 10%
362	ICOATIBC.	Титановое основание абатмента Octa JDIcon Plus	Общая длина: 5 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.12 г ± 10%

363	ISTIBC	Титановое основание с захватом JDIcon Ultra.S, высота 0.5 мм	Общая длина: 8.05 мм 0/-0.090 мм Высота: 0.5 мм $\pm$ 10% Масса: 0.112 г $\pm$ 10%
364	EVTIBC:	Титановое основание с захватом JDEvolution Plus, высота 0.5 мм	Высота: 0.5 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 7.45 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.117 г $\pm$ 10%
365	EVTIBNEC:	Титановое основание без захвата JDEvolution Plus, высота 0.5 мм	Высота: 0.5 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 5.95 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.10 г $\pm$ 10%
366	EVTIB15C:	Титановое основание с захватом JDEvolution Plus, высота 1.5 мм	Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8.48 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.150 г $\pm$ 10%
367	EVTIB15NEC:	Титановое основание без захвата JDEvolution Plus, высота 1.5 мм	Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 7 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.135 г $\pm$ 10%
368	EVTIB30C:	Титановое основание с захватом JDEvolution Plus, высота 3.0 мм	Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 9.975 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.198 г $\pm$ 10%
369	EVTIB30NEC:	Титановое основание без захвата JDEvolution Plus, высота 3.0 мм	Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Общая длина: 8.8 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.183 г $\pm$ 10%
370	EVTIBNC:	Титановое основание длинное с захватом JDEvolution Plus, высота 0.5 мм	Высота: 0.5 мм $\pm$ 0.02 мм Общая длина: 10.475 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.17 г $\pm$ 10%
371	EVTIBNENC:	Титановое основание длинное без захвата JDEvolution Plus, высота 0.5 мм	Высота: 0.5 мм $\pm$ 0.02 мм Общая длина: 9.3 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.16 г $\pm$ 10%
372	EVTIB15NC:	Титановое основание длинное с захватом JDEvolution Plus, высота 1.5 мм	Высота: 1.5 мм $\pm$ 0.02 мм Общая длина: 11.475 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.20 г $\pm$ 10%
373	EVTIB15NENC:	Титановое основание длинное без захвата JDEvolution Plus, высота 1.5 мм	Высота: 1.5 мм $\pm$ 0.02 мм Общая длина: 10.3 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.19 г $\pm$ 10%
374	EVTIB30NC:	Титановое основание длинное с захватом JDEvolution Plus, высота 3.0 мм	Общая длина: 12.975 мм 0/-0.110 мм Высота: 3.0 мм $\pm$ 0.02 мм Масса: 0.24 г $\pm$ 10%
375	EVTIB30NENC:	Титановое основание длинное без захвата JDEvolution Plus, высота 3.0 мм	Общая длина: 11.8 мм 0/-0.110 мм Высота: 3.0 мм $\pm$ 0.02 мм Масса: 0.23 г $\pm$ 10%
376	EVTIB15TSC:	Титановое основание Tissue с захватом JDEvolution Plus, высота 1.5 мм	Общая длина: 8.48 мм 0/-0.090 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.14 г $\pm$ 10%
377	EVTIB15NETSC:	Титановое основание Tissue без захвата JDEvolution Plus, высота 1.5 мм	Общая длина: 7.28 мм 0/-0.090 мм Высота: 1.5 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.13 г $\pm$ 10%
378	EVTIB30TSC:	Титановое основание Tissue с захватом JDEvolution Plus, высота 3.0 мм	Общая длина: 9.98 мм 0/-0.090 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.17 г $\pm$ 10%
379	EVTIB30NETSC:	Титановое основание Tissue без захвата JDEvolution Plus, высота 3.0 мм	Общая длина: 8.78 мм 0/-0.090 мм Высота: 3.0 мм 0/-0.060 мм Масса: 0.16 г $\pm$ 10%
380	ICCS	Винт-заглушка JDIcon	Общая длина: 5.6 мм 0/-0.075 мм Ширина шестиугольника: 1.2 мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.09 г $\pm$ 10%
381	ISCS	Винт-заглушка JDIcon Ultra.S	Общая длина: 5.2 мм 0/-0.075 мм

			Ширина шестиугольника: 1.2 мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.038 г ± 10%
382	ICCS.	Винт-заглушка JDIcon Plus	Общая длина: 5.7 мм 0/-0.075 мм Ширина шестиугольника: 1.2 мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.09 г ± 10%
383	EVCS:	Винт-заглушка JDEvolution Plus	Общая длина: 5.4 мм 0/-0.075 мм Ширина шестиугольника: 1.27 мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.076 г ± 10%
384	EVCS6:	Винт-заглушка JDEvolution Plus, диаметр 6.0 мм	Общая длина: 5.4 мм 0/-0.075 мм Ширина шестиугольника: 1.27 мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.10 г ± 10%
385	ICS	Винт ортопедический JDIcon	Общая длина: 7.25 мм 0/-0.090 мм Ширина шестиугольника: 1.2мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.09 г ± 10%
386	ICSA	Винт ортопедический для угловой отвертки JDIcon	Общая длина: 7.25 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.084 г ± 10%
387	ICCASA	Винт для углового абатмента Мульти-юнит JDIcon	Общая длина: 7.2 мм 0/-0.090 мм Ширина шестиугольника: 1.2мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.07 г ± 10%
388	ISS	Винт ортопедический JDIcon Ultra.S	Общая длина: 7.3 мм 0/-0.090 мм Ширина шестиугольника: 1.2мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.047 г ± 10%
389	ISSA	Винт ортопедический для угловой отвертки JDIcon Ultra.S	Общая длина: 7.3 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.055 г ± 10%
390	ICS.	Винт ортопедический JDIcon Plus	Общая длина: 8 мм 0/-0.090 мм Ширина шестиугольника: 1.2мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.067 г ± 10%
391	ICSA.	Винт ортопедический для угловой отвертки JDIcon Plus	Общая длина: 8 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.070 г ± 10%
392	ICCASA.	Винт для углового абатмента Мульти-юнит JDIcon Plus	Общая длина: 6.7 мм 0/-0.090 мм Ширина шестиугольника: 1.2мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.053 г ± 10%
393	ICOAPS.	Винт ортопедический для абатмента Octa JDIcon Plus	Общая длина: 4.8 мм 0/-0.075 мм Ширина шестиугольника: 1.2мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.054 г ± 10%
394	ICOAPSA.	Винт ортопедический для углового абатмента Octa JDIcon Plus	Общая длина: 5.2 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.060 г ± 10%
395	EVS:	Винт ортопедический JDEvolution Plus	Общая длина: 7.775 мм 0/-0.090 мм Ширина шестиугольника: 1.27 мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.09 г ± 10%
396	EVSA:	Винт ортопедический для угловой отвертки JDEvolution Plus	Общая длина: 7.775 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.086 г ± 10%
397	EVCAPS:	Винт ортопедический для абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus	Общая длина: 3.8 мм 0/-0.075 мм Ширина шестиугольника: 1.27 мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.03 г ± 10%
398	EVCAPSL:	Винт ортопедический длинный для абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus	Общая длина: 4.3 мм 0/-0.075 мм

			Ширина шестиугольника: 1.27 мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.03 г ± 10%
399	EVCASA:	Винт для углового абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus	Общая длина: 6.4 мм 0/-0.090 мм Ширина шестиугольника: 1.27 мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.056 г ± 10%
400	EVCASA60:	Винт для 60° углового абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus	Общая длина: 7.775 мм 0/-0.090 мм Ширина шестиугольника: 1.27 мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.08 г ± 10%
401	EVCAPS	Винт ортопедический для абатмента Мульти-юнит JDEvolution	Общая длина: 3.8 мм 0/-0.075 мм Ширина шестиугольника: 1.2 мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.03 г ± 10%
402	EVCASA	Винт для углового абатмента Мульти-юнит JDEvolution	Общая длина: 6.4 мм 0/-0.090 мм Ширина шестиугольника: 1.27 мм +0.02/0.00 мм Масса: 0.056 г ± 10%
403	EVCAPSA	Винт ортопедический для угловой отвертки Мульти-юнит JDEvolution	Общая длина: 3.8 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.03 г ± 10%
404	ICSBCEC	Скан-маркер JDIcon	Общая длина: 14.35 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.386 г ± 10%
405	ISSBCEC	Скан-маркер JDIcon Ultra.S	Общая длина: 14.25 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.325 г ± 10%
406	EVCASBCEC:	Скан-маркер абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus	Общая длина: 12 мм ± 0.01 мм Масса: 0.78 г ± 10%
407	ICSBCEC.	Скан-маркер JDIcon Plus с захватом	Общая длина: 14.4 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.38 г ± 10%
408	ICOASBCEC.	Скан-маркер абатмента Octa JDIcon Plus	Общая длина: 12 мм ± 0.01 мм Масса: 0.43 г ± 10%
409	EVSBCCEC:	Скан-маркер JDEvolution Plus	Общая длина: 14.3 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.31 г ± 10%
410	EVCASBCEC	Скан-маркер абатмента Мульти-юнит JDEvolution	Общая длина: 12 мм ± 0.01 мм Масса: 0.780 г ± 10%
411	ICOAHC.	Заживляющий колпачок абатмента Octa JDIcon Plus	Диаметр: 4.0 мм 0.00/-0.05 мм Общая длина: 3.75 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.078 г ± 10%
412	ICOAHC54.	Заживляющий колпачок абатмента Octa JDIcon Plus, диаметр 5.0 мм, высота 4.0 мм	Общая длина: 4.0 мм 0/-0.075 мм Диаметр: 5.3 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.24 г ± 10%
413	EVCANHC	Заживляющий колпачок абатмента Мульти-юнит JDEvolution, высота 3.5 мм	Общая длина: 4.25 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.5 мм ± 10% Диаметр: 4.8 мм 0/-0.075 мм Масса: 0.23 г ± 10%
414	EVCANCL	Заживляющий колпачок абатмента Мульти-юнит JDEvolution, высота 6 мм	Диаметр: 5.3 мм ± 0.02 мм Общая длина: 6 мм ± 0.10 мм Масса: 0.065 г ± 10%
415	EVCANCB	Заживляющий колпачок PEEK абатмента Мульти-юнит JDEvolution, высота 3.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.05 мм Общая длина: 4.5 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.5 мм ± 10% Масса: 0.08 г ± 10%
416	EVCANHC:	Заживляющий колпачок абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus, высота 3.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0/-0.075 мм Общая длина: 4.25 мм 0/-0.075 мм Высота: 3.5 мм ± 10% Масса: 0.23 г ± 10%
417	EVCANCL:	Заживляющий колпачок абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus, высота 6 мм	Диаметр: 5.3 мм ± 0.02 мм Общая длина: 6 мм ± 0.10 мм Масса: 0.065 г ± 10%

418	EVCAHCB:	Заживляющий колпачок PEEK абатмента Мульти-юнит JDEvolution Plus, высота 3.5 мм	Диаметр: 4.8 мм 0.00/+0.05 мм Общая длина: 4.5 мм 0/-0.075 м Высота: 3.5 мм $\pm 10\%$ Масса: 0.07 г $\pm 10\%$
419	EVCATANEC:	Временный колпачок абатмента Мульти-юнит без захвата JDEvolution Plus	Общая длина: 12 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.205 г $\pm 10\%$
420	EVCATANEWC:	Временный колпачок абатмента Мульти-юнит без захвата для сварки JDEvolution Plus	Общая длина: 12 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.437 г $\pm 10\%$
421	EVCATANEWS C:	Временный колпачок абатмента Мульти-юнит без захвата гладкий для сварки JDEvolution Plus	Общая длина: 13.3 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.558 г $\pm 10\%$
422	EVCATANEC	Временный колпачок абатмента Мульти-юнит без захвата JDEvolution	Общая длина: 12 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.21 г $\pm 10\%$
423	EVCATANEWC	Временный колпачок абатмента Мульти-юнит без захвата для сварки JDEvolution	Общая длина: 12 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.437 г $\pm 10\%$
424	ICATR	Винт для извлечения абатмента JDIcon	Общая длина: 9.5 мм 0/-0.090 мм Масса: 0.10 г $\pm 10\%$
425	EVSCPC:	ScanPost JDEvolution Plus	Общая длина: 12.48 мм 0/-0.110 мм Масса: 0.331 г $\pm 10\%$

17. Транспортировка.

Транспортировка изделий должна производиться всеми видами крытого транспорта с соблюдением условий и требований, установленных на данном виде транспорта.

Температура	20 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C
Атмосферное давление	Н/П
Относительная влажность	Н/П

18. Потенциальные потребители.

Медицинские изделия предусмотрены для использования стоматологом, имеющим опыт проведения данной процедуры (стоматологи-реставраторы, хирурги).

Условия выполнения процедуры:

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактическом учреждении (в стоматологических клиниках).

Категория пациентов:

Используются для мужчин и женщин старше 18 лет.

19. Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия.

Не предусмотрены.

20. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения.

Неприменимо

21. Порядок и условия утилизации или уничтожения медицинского изделия.

Медицинские изделия после использования относятся к медицинским отходам и являются медицинскими отходами класса Б – эпидемиологически опасные отходы. Мероприятия по обеззараживанию и утилизации использованных имплантатов должны проводиться в соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 2.1.3684-21

Утилизировать в соответствии с принятой медицинской практикой и применимыми местными, государственными и федеральными законами и правилами.

22. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Во время процедуры имплантации используются следующие изделия:

Включены в состав медицинского изделия:

- Абатменты
- Формирователи десны
- Трансферы
- Интерфейсы
- Титановое основание
- Винты-заглушки
- Скан-маркеры
- Заживляющие колпачки

Не включены в состав медицинского изделия:

Сведения о совместимых медицинских изделиях

Наименование МИ	Инструменты для формирования костного ложа	Инструменты для снятия/установки имплантатов и супраструктур абатментов	Другие совместимые изделия
Имплантат JDEvolution Plus JDPterygo JDNasal JDZygoma	Сверла с внешней ирригацией: DRX 2.5 арт. 4244, DRX3.0 арт. 4306 ПУ № ПЗН 2016/4608 от 19.01.2022. (Alpha-Bio) Прямое сверло BD2.0 BD2.4 BD2.8 BD3.0 BD3.2 BD3.65 BD4.1 BD4.5 BD4.8 BD5.2 BD5.8 ПУ № ПЗН 2016/4796 от 12.04.2022. (Alpha-Bio)	Имплантовод CS Implant Driver - ITD2.5 S CS ITD2.5 L CS MITD2.5-CS ПУ № ПЗН 2022/17998 от 16.08.2022. (Alpha-Bio) Инструмент для введения имплантата IT2.5 SM CS IT2.5 LM CS ПУ № ПЗН 2021/14310 от 14.05.2021. (Alpha-Bio) Ключи G-ITDS2.5 G-ITDM2.5 G-ITDL2.5 GITS2.5/1.25 GITL2.5/1.25 MITD2.5-IH ПУ №ПЗН 2016/9326 от 12.04.2022. (Alpha-Bio)	Ключ (Универсальный динамометрический трещоточный) 4572 URT ПУ № ФСЗ 2011/10261 от 12.04.2022. (Alpha-Bio)
JDZygoma	10. Сверло NobelZygoma 0° Twist Drill 2.9 мм. 11. Сверло NobelZygoma 0° Twist Drill 2.9 мм Short. 12. Сверло NobelZygoma 0° Twist Drill 3.5 мм. 13. Сверло NobelZygoma 0° Twist Drill 3.5 мм Short. 14. Сверло NobelZygoma 0° Twist Drill 4.0 мм. 15. Сверло NobelZygoma 0° Twist Drill 4.0 мм Short. ПУ № ПЗН 2021/14966 от 03.08.2021(Nobel Biocare) Сверло Branemark System (Bmk Syst) Zygoma Twist Drill размеры: 2,9 мм 2,9 мм Short; 3,5 мм; 3,5 мм Short Сверло Branemark System (Bmk Syst) Zygoma Pilot Drill размеры: 3,5 мм 3,5 мм Short Бор Branemark System (Bmk Syst) Zygoma Round Bur ПУ № ФСЗ 2010/07929 от 06.09.2013 (Nobel Biocare)	Имплантовод CS Implant Driver - ITD2.5 S CS ITD2.5 L CS MITD2.5-CS ПУ № ПЗН 2022/17998 от 16.08.2022. (Alpha-Bio) Инструмент для введения имплантата IT2.5 SM CS IT2.5 LM CS ПУ № ПЗН 2021/14310 от 14.05.2021. (Alpha-Bio) Ключи G-ITDS2.5 G-ITDM2.5 G-ITDL2.5 GITS2.5/1.25 GITL2.5/1.25 MITD2.5-IH ПУ №ПЗН 2016/9326 от 12.04.2022. (Alpha-Bio)	Ключ (Универсальный динамометрический трещоточный) 4572 URT ПУ № ФСЗ 2011/10261 от 12.04.2022. (Alpha-Bio)
JDIcon/ JDIcon F	1. Набор хирургический NobelReplace Conical Connection (CC) PureSet, в составе:	1. Набор хирургический NobelReplace Conical Connection (CC) PureSet, в составе:	3. Набор хирургический NobelParallel Conical Coimection (CC) PureSet в

	- сверло Drill Tapered RP 4,3 x 8 мм - 1 шт.; - сверло Drill Tapered RP 4,3 x 11,5 мм - 1 шт.; - удлинитель сверла Drill Extension Shaft - 1 шт.; ПУ № ПЗН 2019/9483 от 30.12.2019. (Nobel Biocare) Прямое сверло BD2.0 BD2.4 BD2.8 BD3.0 BD3.2 BD3.65 BD4.1 BD4.5 BD4.8 BD5.2 BD5.8 ПУ № ПЗН 2016/4796 от 12.04.2022. (Alpha-Bio)	- имплантовод Implant Driver Conical Connection (CC) RP 28 мм - 1 шт.; - имплантовод Implant Driver Conical Connection (CC) RP 37 мм; - индикатор направления Direction Indicator Tapered RP - 1 шт.; ПУ № ПЗН 2019/9483 от 30.12.2019. (Nobel Biocare) 3. Набор хирургический NobelParallel Conical Coimection (CC) PureSet в составе: - имплантовод Implant Driver Conical Connection (CC) RP 28 мм - 1 шт.; - имплантовод Implant Driver Conical Connection (CC) RP 37 мм - 1 шт.; ПУ № ПЗН 2019/9483 от 30.12.2019. (Nobel Biocare) 4. Набор хирургический NobelActive PureSet, в составе: - имплантовод Implant Driver Conical Connection (CC) RP 28 мм - 1 шт.; - имплантовод Implant Driver Conical Connection (CC) RP 37 мм - 1 шт.; ПУ № ПЗН 2019/9483 от 30.12.2019. (Nobel Biocare) Имплантовод Guided Implant Mount Bmk Syst RP Имплантовод Guided Implant Mount NobelActive RP 5.0 Имплантовод Guided Implant Mount NobelParallel CC RP 5.0 ПУ № ПЗН 2021/14742 от 09.07.2021 (Nobel Biocare)	составе: - глубиномер Depth Probe 7-18 мм Z-shaped - 1 шт - ручной хирургический динамометрический ключ NobelReplace Manual Torque WrenchSurgical - 1 шт. ПУ № ПЗН 2019/9483 от 30.12.2019. (Nobel Biocare) 4. Набор хирургический NobelActive PureSet, в составе: - глубиномер Depth Probe 7-18 мм Z-shaped - 1 шт - ручной хирургический динамометрический ключ NobelActive Manual Torque WrenchSurgical - 1 шт. ПУ № ПЗН 2019/9483 от 30.12.2019. (Nobel Biocare) Ключ (Универсальный динамометрический трещоточный) 4572 URT ПУ № ФСЗ 2011/10261 от 12.04.2022. (Alpha-Bio)
JDIcon Plus /JDIcon Plus F	Прямое сверло BD2.0 BD2.4 BD2.8 BD3.0 BD3.2 BD3.65 BD4.1 BD4.5 BD4.8 BD5.2 BD5.8 - ПУ № ПЗН 2016/4796 от 12.04.2022. (Alpha-Bio) Сверла TANTDF2018 Ø2.5 SD2518S Ø2.8 SD2818S Ø3.3 TANSDF3318 Ø3.8 TANSDF3818 Ø4.3 TANSDF4318 Ø4.8 15 TANSDF4815 Хирургический набор полный KARIN3001 ПУ №ПЗН 2016/5077 от 28.11.2016 (Megagen)	Имплантоводы TANHCL, TANREL, HCL 17, RCS17, RCL17 Хирургический набор полный KARIN3001 ПУ №ПЗН 2016/5077 от 28.11.2016 (Megagen) Имплантоводы TANRES, TANREL, TANHCL Хирургический набор стандартный (SurgicalKitStandart) KARIN3003 ПУ №ПЗН 2016/5077 от 28.11.2016 (Megagen) Имплантоводы TANHCS, TANHCU Набор для профилирования кости (BoneProfilerKit) KARBP3000 ПУ №ПЗН 2016/5077 от 28.11.2016 (Megagen) Имплантовод HCS17 Хирургический набор (SurgicalKit) KAOIN3003 ПУ №ПЗН 2016/5077 от 28.11.2016 (Megagen)	Ключ (Универсальный динамометрический трещоточный) 4572 URT ПУ № ФСЗ 2011/10261 от 12.04.2022. (Alpha-Bio) Отвертки, трепаны, пилы - Хирургический набор полный KARIN3001 ПУ №ПЗН 2016/5077 от 28.11.2016 (Megagen)
JDIcon Ultra.S	Прямое сверло BD2.0 BD2.4 BD2.8 ПУ № ПЗН 2016/4796 от 12.04.2022. (Alpha-Bio)	4. Набор хирургический NobelActive PureSet, в составе: - имплантовод Implant Driver Conical Connection (CC) 3.0 28 мм - 1 шт.; - имплантовод Implant Driver Conical Connection (CC) 3.0 37 мм - 1 шт.; ПУ № ПЗН 2019/9483 от 30.12.2019.	4. Набор хирургический NobelActive PureSet, в составе: - глубиномер Depth Probe 7-18 мм Z-shaped - 1 шт - ручной хирургический динамометрический ключ

		(Nobel Biocare) - Имплантовод Guided Implant Mount Bmk Syst RP - Имплантовод Guided Implant Mount NobelActive RP 5.0 - Имплантовод Guided Implant Mount NobelParallel CC RP 5.0 - Имплантовод Implant Mount 5.0 РУ № РЗН 2021/14742 от 09.07.2021. (Nobel Biocare)	NobelActive Manual Torque WrenchSurgical - 1 шт. РУ № РЗН 2019/9483 от 30.12.2019. (Nobel Biocare) - Ключ (Универсальный динамометрический трещоточный) 4572 URT РУ № ФСЗ 2011/10261 от 12.04.2022. (Alpha-Bio)
--	--	--	--

23. Перечень применимых стандартов и директив.

Номер документа	Название
MDD 93/42/EEC	Директива о медицинских изделиях
EN ISO 13485:2016	Медицинские изделия - системы менеджмента качества - требования для целей регулирования
ANSI/AAMI/ISO 15223-1:2016	Медицинские изделия. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
EN 1041:2013	Изделия медицинские. Информация, предоставляемая изготовителем
EN ISO 14971:2012	Медицинские изделия - Применение управления рисками к медицинским изделиям
ISO 14971:2019	Медицинские изделия - Применение управления рисками к медицинским изделиям
Med Dev 2.12-1	Руководство по надзору за медицинскими изделиями
Med Dev 2.12-2	Руководство по постмаркетинговым клиническим исследованиям
Med Dev 2.7.1	Клиническая оценка. Руководство для производителей и уполномоченных органов
EN ISO 11137-1:2020	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий
EN ISO 11137-2: 2015	Стерилизация медицинской продукции. Радиационная стерилизация. Часть 2. Установление стерилизующей дозы
EN ISO 11137-3:2017	Стерилизация изделий медицинского назначения - излучения - Часть 3: руководящие указания по дозиметрические аспекты разработки, валидации и текущему контролю
EN 556-1: 2002	Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории "стерильные". Часть 1. Требования к стерилизации упакованных медицинских изделий
EN 556-2: 2015	Стерилизация медицинских изделий. Требования к медицинским изделиям категории "стерильные". Часть 2. Требования к медицинским изделиям, произведенным в условиях асептического производства
EN ISO 14644-1:2016	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц
EN ISO 14644-2:2016	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Текущий контроль для подтверждения постоянного соответствия чистоты воздуха по концентрации частиц
EN ISO 14644-3: 2019	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний
EN ISO 14698-1: 2004	Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биозагрязнений. Часть 1. Общие принципы и методы

EN ISO 14698-2: 2004	Чистые помещения и соответствующие контролируемые условия. Контроль уровня биологического загрязнения. Часть 2. Оценка и интерпретация данных биологического загрязнения
EN ISO 10993-1:2010	Оценка биологическая медицинских изделий. Часть 1. Оценка и испытания в рамках процесса менеджмента риска
EN ISO 11607-1: 2017	Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам
EN ISO 11607-2:2017	Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 2. Требования к валидации процессов формирования, герметизации и сборки
EN ISO 11737-1:2018	Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1. Оценка популяции микроорганизмов на продукции
EN 62366-1:2015	Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности
EN ISO 14801: 2017	Стоматология. Имплантаты. Усталостные испытания для внутрикостных стоматологических имплантатов
EN 1642:2012	Стоматология. Медицинские изделия для стоматологических целей. Имплантаты дентальные
EN ISO 17664:2018	Обработка медицинской продукции. Информация, предоставляемая изготовителем медицинских изделий для их обработки

24. Название и юридический адрес организации-производителя изделия медицинского назначения и уполномоченного представителя производителя.

Производитель

«J DENTAL CARE S.R.L.»

«ДЖЕЙ ДЕНТАЛКЕА, ЭС.ЭР. ЭЛ.» (Италия)

Via del Tirassegno 41/N 41122 Modena, Italy

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации

ООО «Имплант Сервис»

107031, г. Москва, ул. Рождественка, дом 5/7, строение. 2, Э 3 пом. V К 4 ОФ 261

Тел. +79788671550

www.jdentalcare.ru

Перевод выполнил переводчик

Ремыга Семен Юрьевич

ПОДПИСЬ



Российская Федерация
Город Москва
Семнадцатого ноября две тысячи двадцать второго года

Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Ремыги Семена Юрьевича.

Подпись сделана в моем присутствии.


Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2022-

56 - 3039

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.


Л.В.Дейнеко

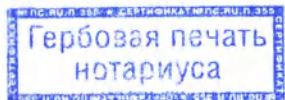

ПОДПИСЬ

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 154 (сто пятьдесят четыре) листа.

Л.В.Дейнеко

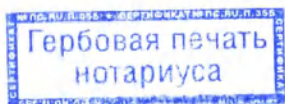

ПОДПИСЬ

Российская Федерация
Город Москва

Семнадцатого ноября две тысячи двадцать второго года

Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2022-

56 - 3042

Уплачено за совершение нотариального действия: 9 300 руб. 00 коп.

Л.В. Дейнеко



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 154 (сто пятьдесят четыре) листа.

Л.В. Дейнеко

ПОДПИСЬ