
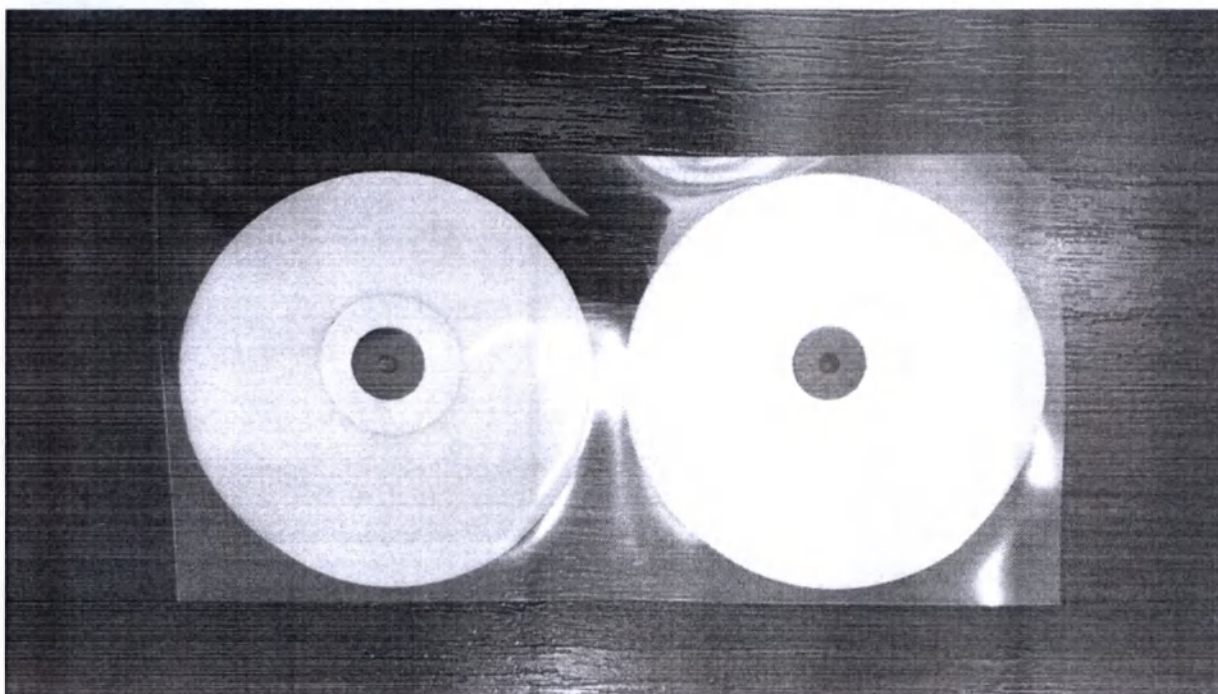


**Фотографические изображения
общего вида
медицинского изделия
«Электрод ЭКГ одноразовый My Heart,
твердогелевый, на вспененной основе, взрослый,
клеящийся, вынесенный»**



China Qingdao Bright Medical Manufacturing Co., Ltd

Электрод ЭКГ одноразовый My Heart, твердогоелевый, на вспененной основе, взрослый, клеящийся, вынесенный, в вариантах исполнения:



1. Электрод ЭКГ одноразовый, твердогоелевый, на вспененной основе, взрослый, клеящийся, вынесенный, круглый, Ø 45 мм (QGD-SF01-ф45мм),
2. Электрод ЭКГ одноразовый, твердогоелевый, на вспененной основе, взрослый, клеящийся, вынесенный, круглый, Ø 50 мм (QGD-SF01-ф50мм),
3. Электрод ЭКГ одноразовый, твердогоелевый, на вспененной основе, взрослый, клеящийся, вынесенный, круглый, Ø 55 мм (QGD-SF01-ф55мм):

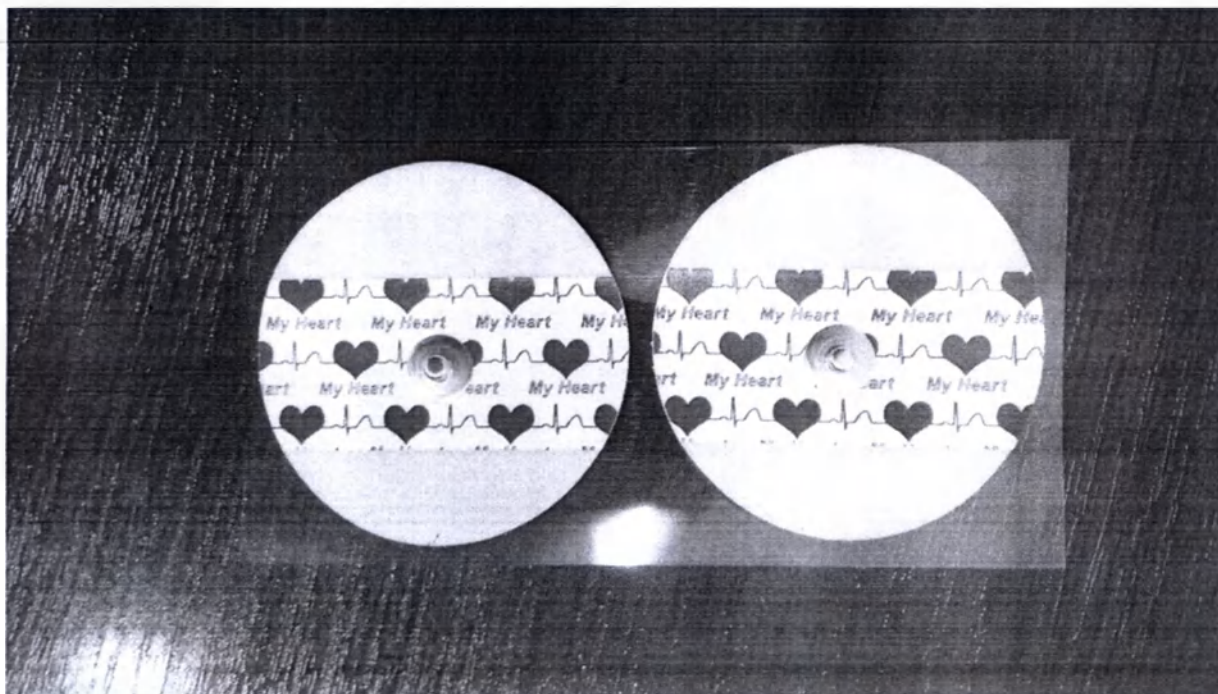



4. Электрод ЭКГ одноразовый, твердоголевым, на вспененной основе, взрослый, клеящийся, вынесенный, каплевидный, 37х42 мм (QGD-SF02-37х42),
5. Электрод ЭКГ одноразовый, твердоголевым, на вспененной основе, взрослый, клеящийся, вынесенный, каплевидный, 42х46 мм (QGD-SF02-42х46):

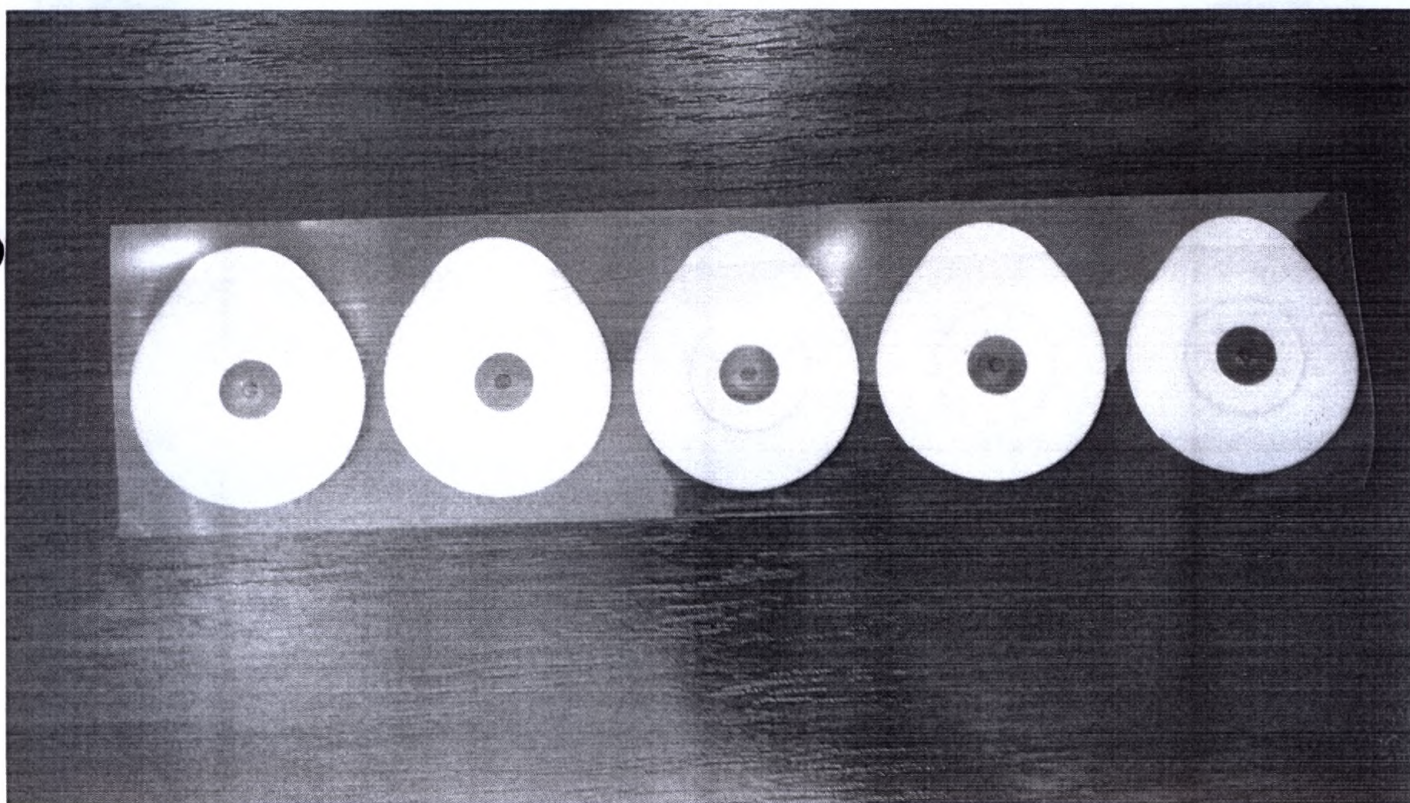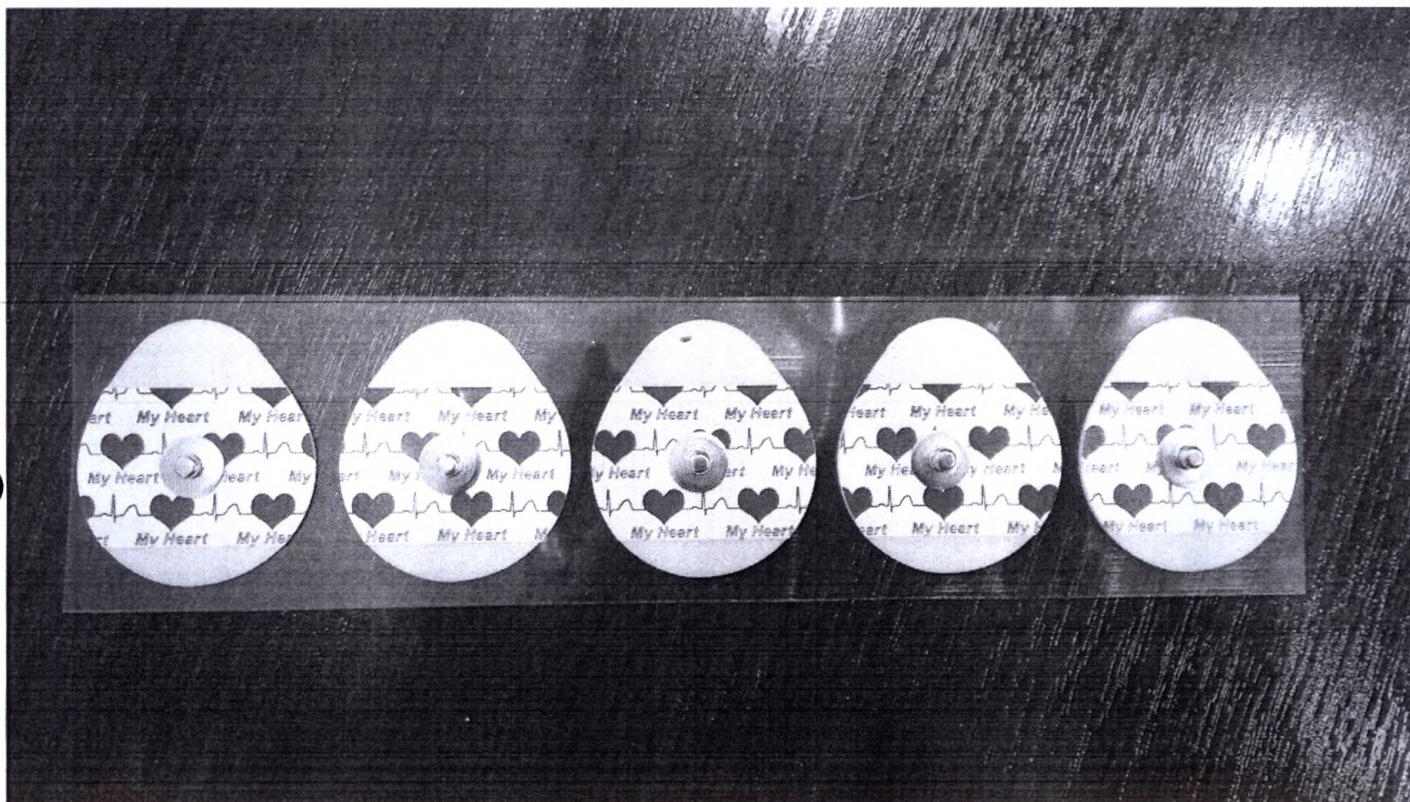

6. Электрод ЭКГ одноразовый, твердоголевым, на вспененной основе, взрослый, клеящийся, вынесенный, каплевидный, 30х33 мм (QGD-SF03-30х33):

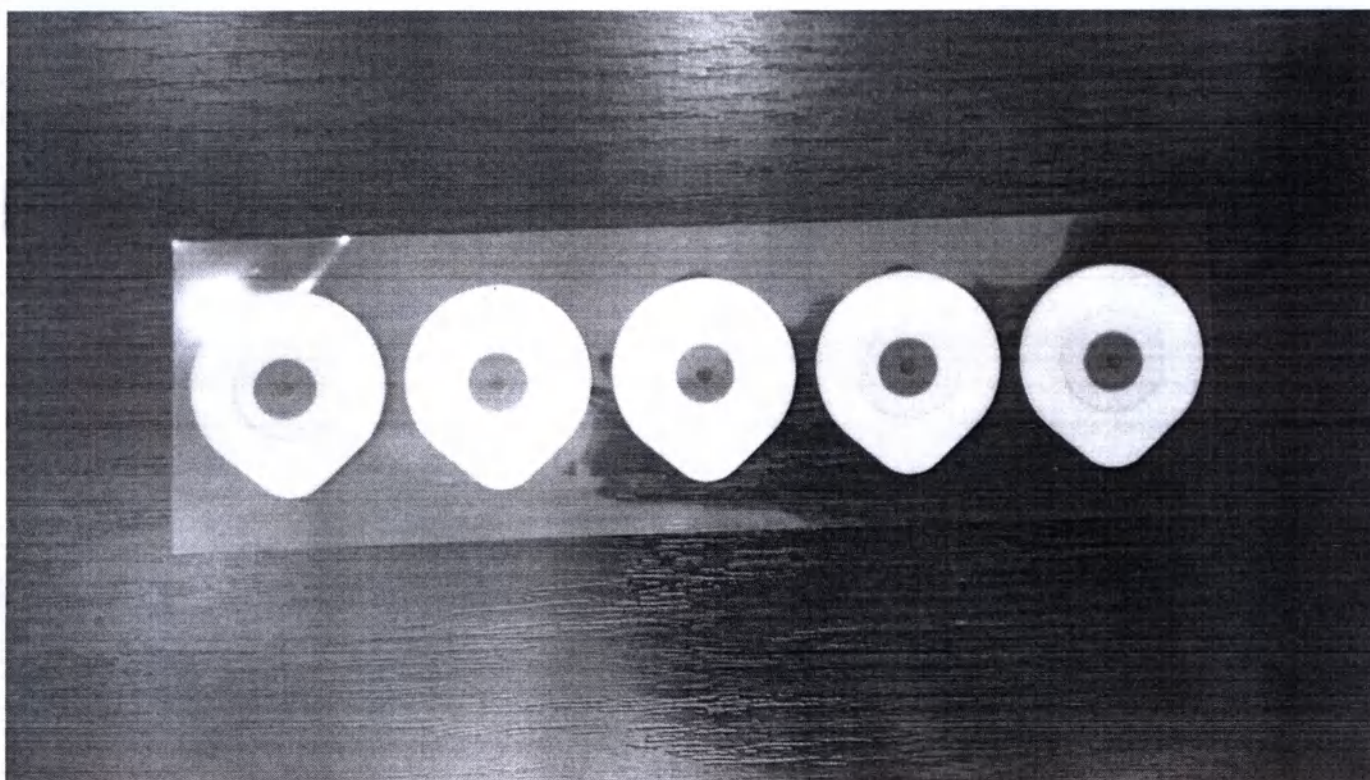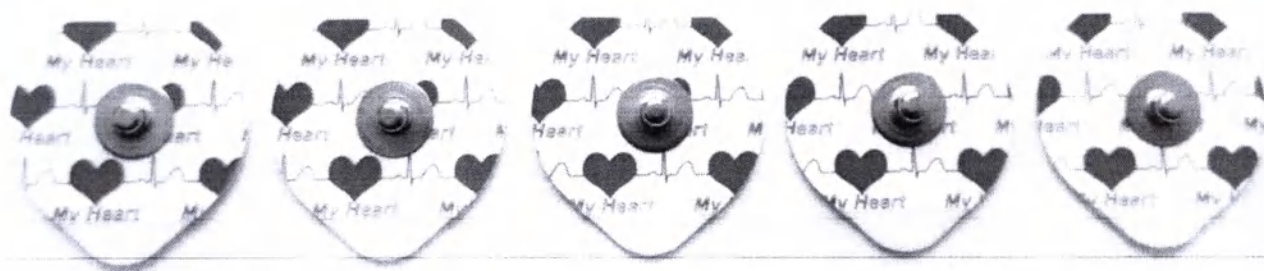

7. Электрод ЭКГ одноразовый, твердотелевый, на вспененной основе, взрослый, клеящийся, вынесенный, прямоугольный, 30x40 мм (QGD-SF08-30x40),
8. Электрод ЭКГ одноразовый, твердотелевый, на вспененной основе, взрослый, клеящийся, вынесенный, прямоугольный, 37x45 мм (QGD-SF08-37x45):

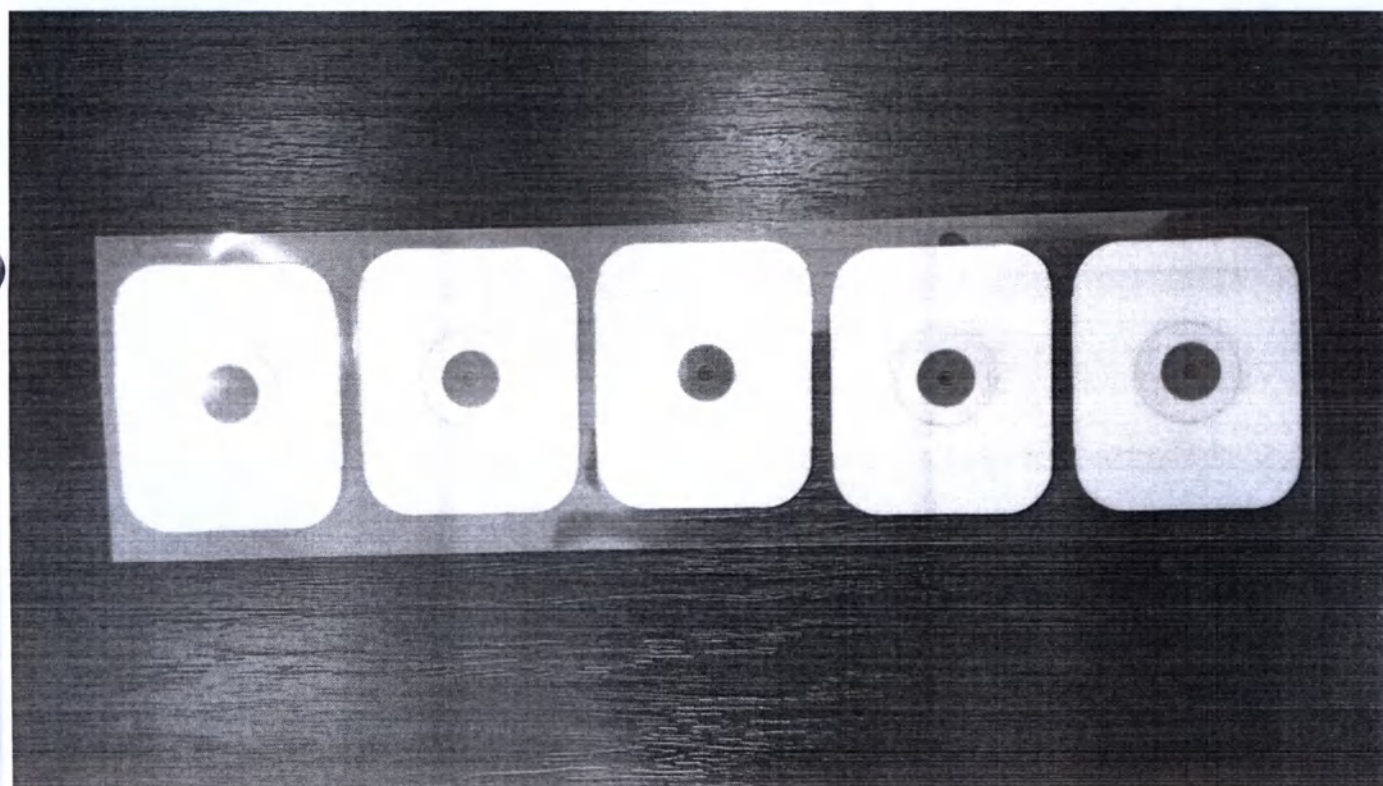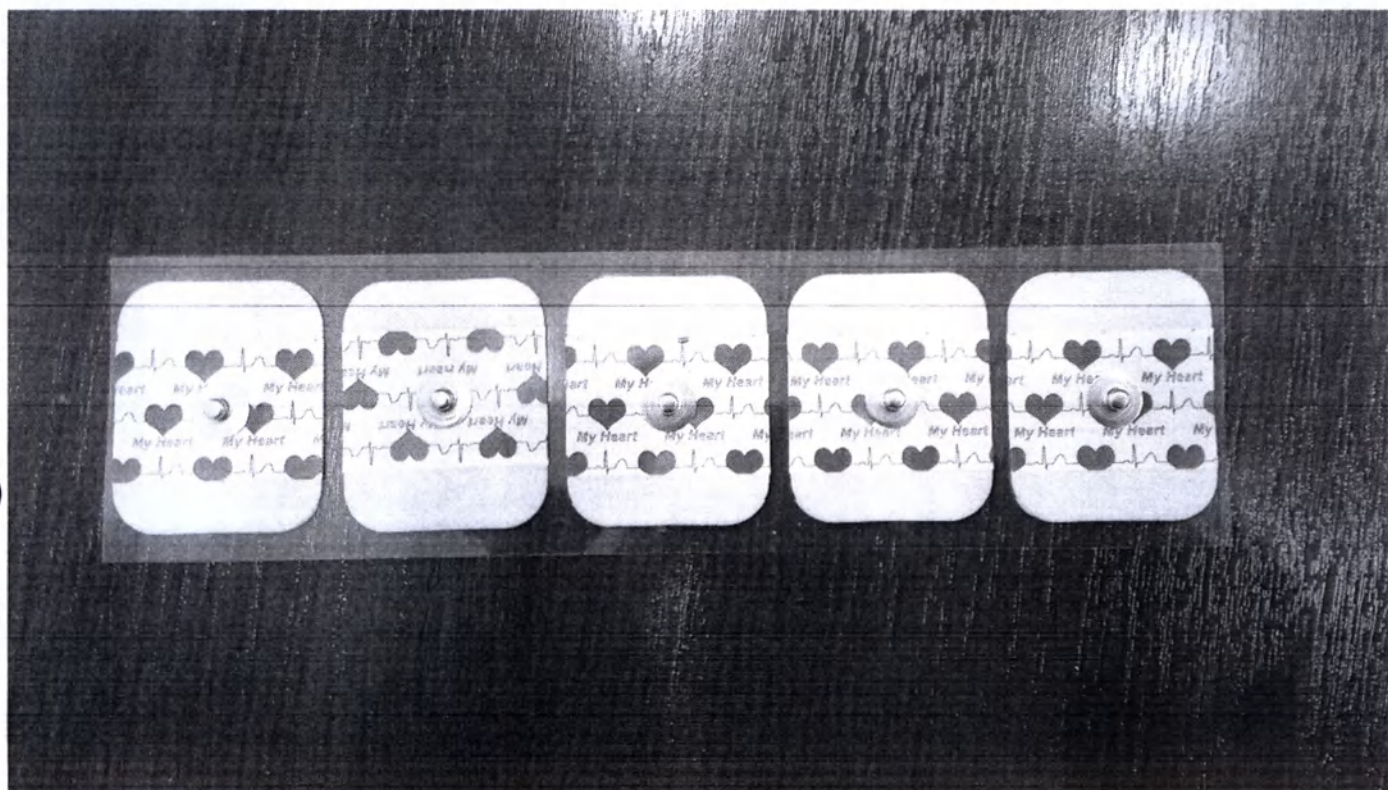

9. Электрод ЭКГ одноразовый, твердотелевый, на вспененной основе, взрослый, клеящийся, вынесенный, прямоугольный, 40x44 мм (QGD-SF08-40x44):




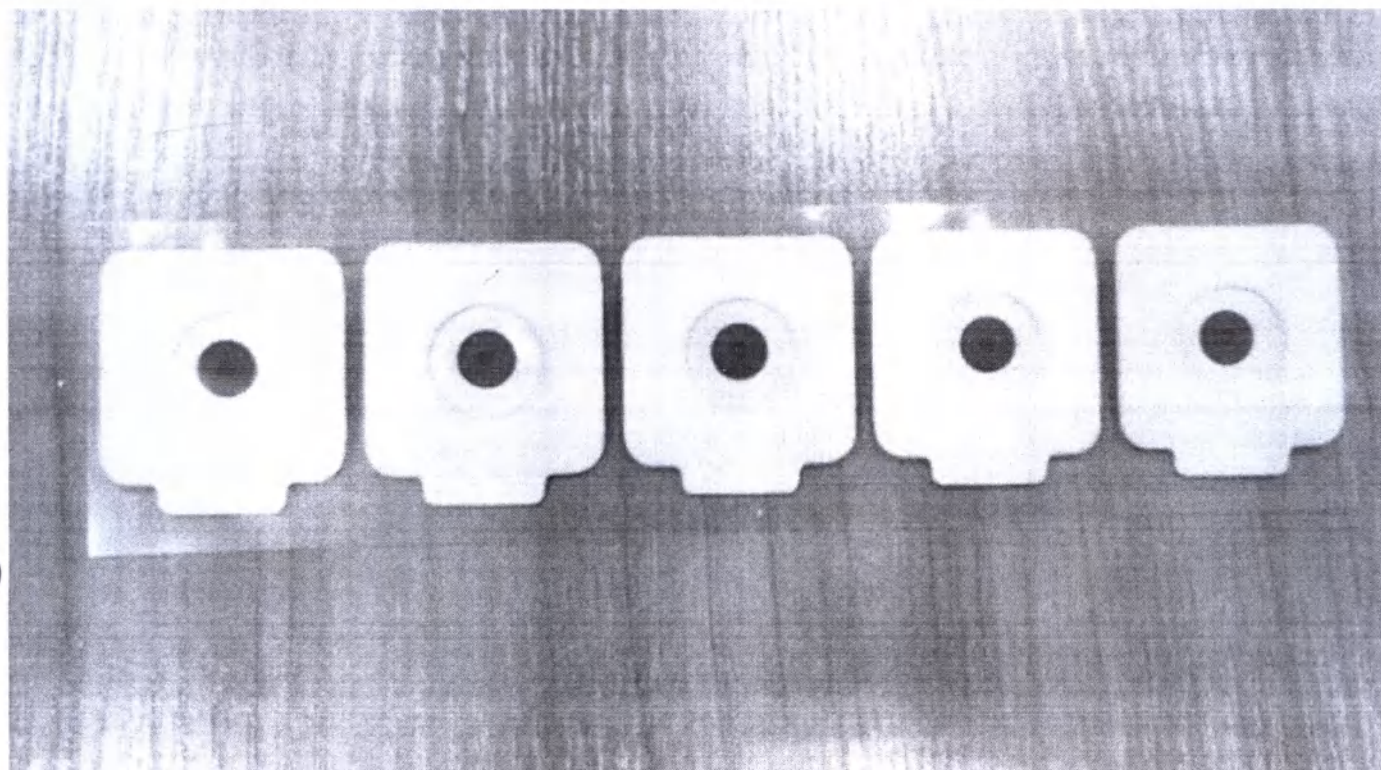


Фото упаковки:

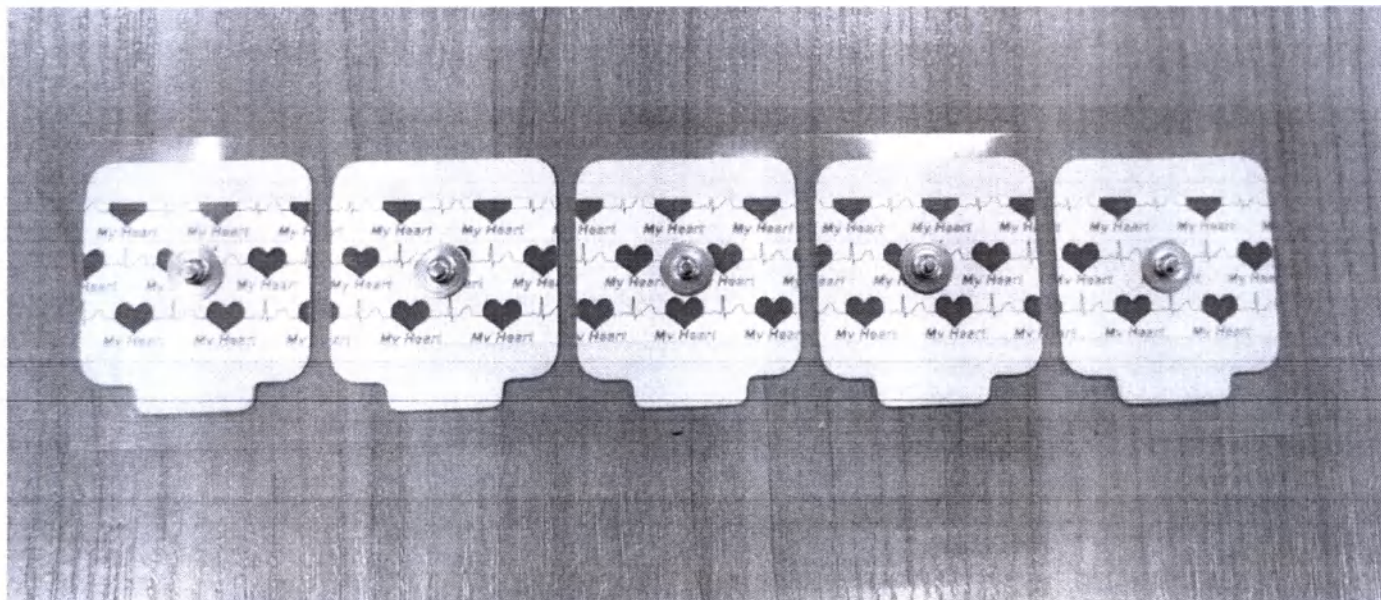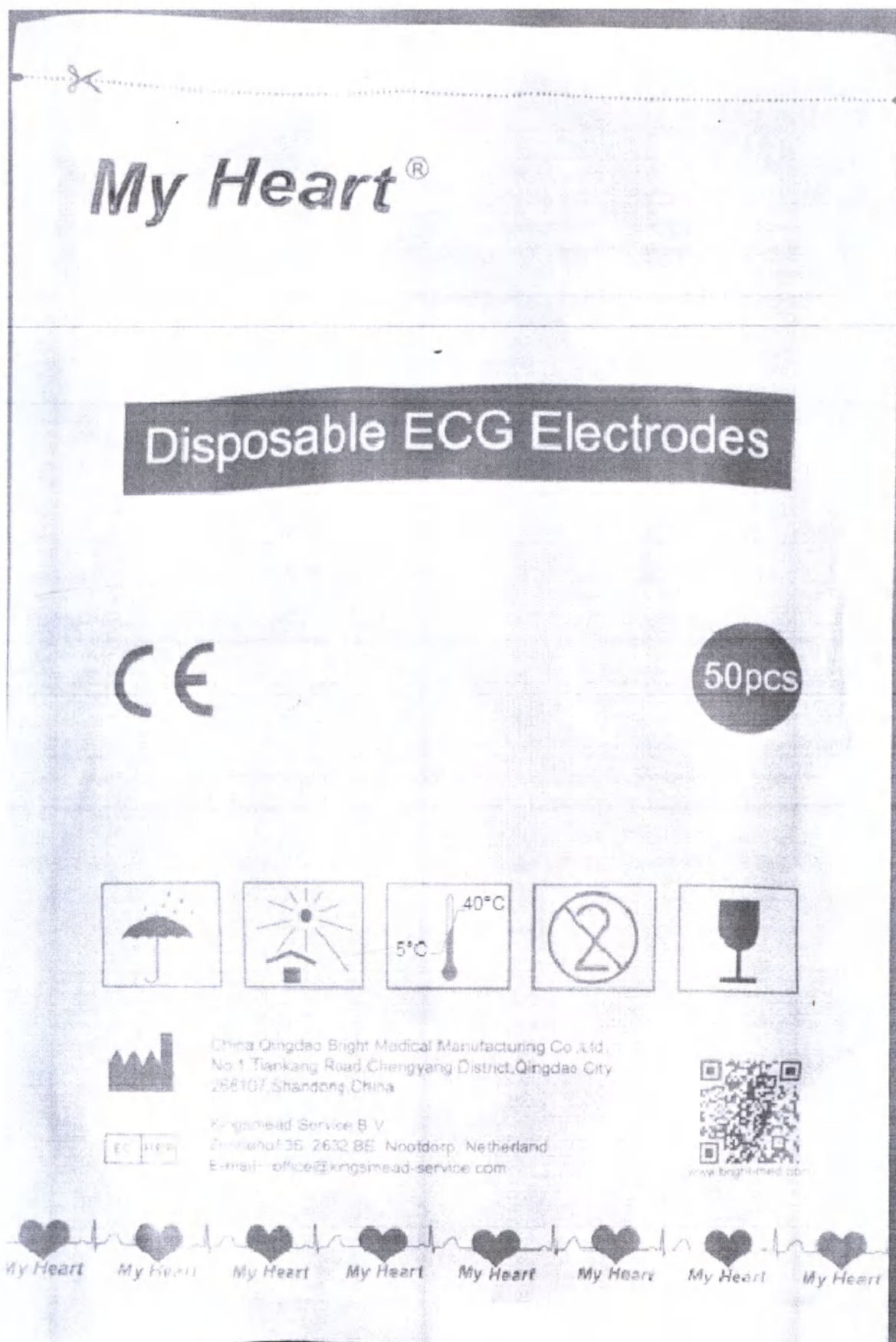

Application

- ① Determine application sites. Remove any excessive hair, calluses and ensure the skin is clear of any oils, creams, fluids, dirt or other impediments to good electric contact. If necessary, clean the skin with appropriate preparation material. Always ensure the application site is dry prior to application of electrodes.
- ② Connect the lead wires to the electrodes.
- ③ Remove the release liner and position the electrodes on the skin. Smooth the backing surface with your finger as necessary.

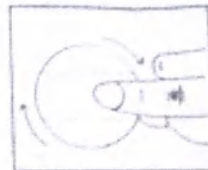


Instructions for use

- ① The product is not for internal use. In case of accidental injection of the electrode consult a physician immediately. Not suitable for use on newborn or premature infants.
- ② Due to high adhesion strength of the adhesive material, this product is not suitable for use on patients with fragile skin.
- ③ Use only in combination with approved patient cables and adapters. Never allow contact with an external electrical source.

DO NOT USE IF THE GEL IS DRY OR DISCOLORED

SUGGEST TO USE OUT WITHIN 15 DAYS AFTER OPENING

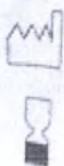

20210421




20230420

REF

QGD-SF01-φ55M11

LOT

2104212001 0737

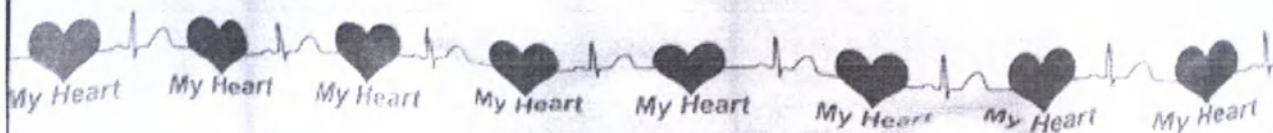

**Электрод ЭКГ одноразовый My Heart, твердогоелевый,
на вспененной основе, взрослый, клеящийся, вынесенный,
вариант исполнения _____**

REF _____


LOT _____



Чайна Циндао Брайт Медикал Мануфэкчуринг Ко., Лтд
№ 1 Тянькан Роад, Сячжуан, район Чэньян, Циндао 266107, Китай

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Гала-Оптика» (ООО «Гала-Оптика»)
Адрес: 119491, Москва, ул. Донская, д. 1, стр. 2, эт. 2, пом. 1, ком. 2
Тел.: +7 (495) 707-17-19
E-mail: info@gala-opt.ru

50 шт.

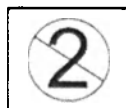


РФ: XXXXX

Сделано в Китае

Прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью
Всего 9 лист об

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

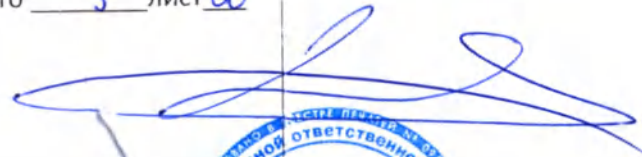

СОЛОВЬЕВ С.А.

