

ООО МК «АСК»



**НАБОР МЕБЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ
ДЛЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
ПО ТУ-9452-001-68690950-2011**

Варианты исполнений:

- Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт»;
- Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»;
- Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Оптима»;
- Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит»;
- Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ».

**Руководство по эксплуатации
НКДЛ.00.00 РЭ.03**

г. Нижний Новгород

Версия 1.0

Оглавление

Введение	3
1 Описание изделия	3
2 Основные технические характеристики	5
3 Маркировка	16
4 Комплектность	18
5 Устройство изделия	36
6 Монтаж, подготовка к работе	39
7 Порядок работы:	41
8 Требования безопасности	41
9 Меры предосторожности при применении медицинского изделия	42
10 Срок службы	42
11 Условия хранения	43
12 Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия	43
13 Техническое обслуживание и ремонт	44
14 Очистка и дезинфекция	45
15 Порядок осуществления утилизации	45
16 Сведения о производителе	46
Приложение 1	47
Перечень применяемых материалов	47
Приложение 2	51
Указания по электромагнитной обстановке	51
Приложение 3	55
Перечень стандартов, на которые даны ссылки в настоящем руководстве по эксплуатации	55

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации является эксплуатационным документом, включающим в себя описание, основные технические данные и правила эксплуатации медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011» (далее – набор, набор мебели, изделие), производства Общества с ограниченной ответственностью Медицинская Компания «АСК» (ООО МК "АСК"), Россия.

Перед применением Изделия Вы должны внимательно изучить данное руководство по эксплуатации для того, чтобы достичь оптимальной эффективности его использования.

На каждое изделие, входящее в состав набора, прилагается паспорт.

1 Описание изделия

Наименование: «Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011».

Назначение: Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011 предназначен для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинико-диагностических лабораториях.

Область применения - клинико-диагностические лаборатории в медицинских организациях.

Потенциальный потребитель - медицинский работник.

Показания к применению медицинского изделия: применять согласно назначению.

Противопоказания к применению медицинского изделия: противопоказания не выявлены. Не применять не по назначению.

Набор мебели представлен следующими исполнениями:

- Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт» (далее-набор «Стандарт»);

- Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс» (далее-набор «Стандарт плюс»);

- Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Оптима» (далее-набор «Оптима»);

- Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит» (далее-набор «Элит»);

- Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ» (далее-набор «КДЛ»).

В состав наборов мебели входят различные изделия, позволяющие создавать специализированные функциональные комбинации.

Перечень изделий, входящих согласно комплектности в состав исполнений набора мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий, и их назначение приведены в таблице 1.

Таблица 1. Перечень изделий, входящих в состав наборов мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий, и их назначение.

№	Наименование изделия набора			Назначение изделия Наименование
	Наименование	Серия	Модель	
1	2	3	1	2
1	Стол лабораторный	Стандарт	СЛ.00.00; СЛ.00.01;	предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинико-диагностических лабораториях
		Стандарт плюс	СЛ.01.00; СЛ.01.01;	
		Оптима	СЛ.01.02; СЛ.01.03;	
		Элит	СЛ.02.00; СЛ.02.01;	
2	Стол лабораторный островной	Стандарт	СЛ.02.02; СЛ.03.00;	
		Стандарт плюс	СЛ.03.01; СЛ.03.02;	
		Оптима	СЛ.03.03; СЛ.04.00	
		Элит		
		Стандарт	СЛО.01.00; СЛО.01.01;	предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинико-диагностических лабораториях
		Стандарт плюс	СЛО.02.00; СЛО.02.01;	
		Оптима	СЛО.03.00; СЛО.03.01;	
		Элит	СЛО.03.02; СЛО.04.00	

Продолжение таблицы 1

№	Наименование изделия набора			Назначение изделия Наименование
	Наименование	Серия	Модель	
1	2	3	1	2
3	Принадлежность: Надстройка для стола	Стандарт Стандарт плюс Оптим Элит	СЛН.01.00, СЛН.01.00 (мод.1.), СЛН.01.01, СЛН.01.01 (мод.1.), СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1.), СЛН.02.00, СЛН.02.00 (мод.1.), СЛН.03.00, СЛН.03.00 (мод.1.), СЛН.03.01, СЛН.03.01 (мод.1.), СЛН.04.00, СЛН.04.00 (мод.1.), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1.)	предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинко-диагностических лабораториях
4	Стол лабораторный для весов	Стандарт Стандарт плюс Оптим Элит	СЛВ.01.00	предназначено для размещения весов и приборов высокой точности, химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов при проведении клинических лабораторных исследований в клинко-диагностических лабораториях
5	Стол лабораторный с мойкой	Стандарт Стандарт плюс Оптим Элит	СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03	предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, а также для мытья лабораторной посуды и инструментов, утилизации отработанных реактивов в клинко-диагностических лабораториях
6	Стол-тумба лабораторный	Стандарт Стандарт плюс Оптим Элит	СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09	предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинко-диагностических лабораториях
7	Столик лабораторный подкатной	-	СИЛ.01.00; СИЛ.01.01	предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, исследуемого биоматериала, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинко-диагностических лабораториях
8	Тумба лабораторная стационарная	Стандарт Стандарт плюс Оптим Элит	ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00	предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинко-диагностических лабораториях
9	Тумба лабораторная подкатная	Стандарт Стандарт плюс Оптим Элит	ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00	предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинко-диагностических лабораториях

Продолжение таблицы 1

№	Наименование изделия набора			Назначение изделия Наименование
	Наименование	Серия	Модель	
1	2	3	1	2
10	Шкаф лабораторный вытяжной	Стандарт плюс	ШВ.01.00; ШВ.01.01; ШВ.02.00; ШВ.02.01	предназначено для защиты медицинского работника при проведении клинических лабораторных исследований с применением химически вредных веществ и удаления из рабочей зоны испарений летучих веществ, пара, газа, дыма, аэрозолей, твердых частиц в клиничко-диагностических лабораториях
		Оптим	ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А	
		Элит		
11	Шкаф лабораторный	Стандарт	ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08	предназначено для хранения сухих предметов и нетоксичных химических веществ в клиничко-диагностических лабораториях
		Стандарт плюс		
		Оптим		
		Элит		
12	Шкаф лабораторный навесной	Стандарт	ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02	предназначено для хранения сухих предметов и нетоксичных химических веществ в клиничко-диагностических лабораториях
		Стандарт плюс		
		Оптим		
		Элит		
13	Сушилка для лабораторной посуды	-	СП.01.00	предназначено для хранения сухих предметов и нетоксичных химических веществ в клиничко-диагностических лабораториях

Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия – 1 по ГОСТ 31508 и в соответствии с номенклатурной классификацией (Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»).

2 Основные технические характеристики

2.1. Изделия набора соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ 16371, технических условий ТУ 9452-001-68690950-2011 и комплекту конструкторской документации.

2.2. Применяемые материалы безопасны и не оказывают негативного влияния на окружающую среду. Детали изделий набора мебели изготовлены из материалов, указанных в Приложении 2.

2.3. Габаритные размеры изделий набора приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Габаритные размеры изделий набора

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типоразмерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ							
1.1	Стол лабораторный, серия Стандарт/Стандарт плюс/Оптим/Элит	СЛ.00.00	800÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.00.01	1000÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020**	750÷950	50
		СЛ.01.00	1000÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.01.01	1000÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.01.02	1000÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.01.03	1000÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типораз- мерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Стол лабораторный, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛ.02.00	1500÷1800	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.02.01	1500÷1800	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.02.02	1500÷1800	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
1.3	Стол лабораторный, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛ.03.00	2700÷3000	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.03.01	2700÷3000	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.03.02	2700÷3000	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.03.03	2700÷3000	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
1.4	Стол лабораторный, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛ.04.00	900÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
2. СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ							
2.1	Стол лабораторный островной, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛО.01.00	1200÷1700	1200÷1400	1400÷1800	1400÷1800	50
		СЛО.01.01	1200÷1700	1200÷1400	1400÷1800	1400÷1800	50
2.2	Стол лабораторный островной, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛО.02.00	1200÷1700	1200÷1400	1400÷1800	1400÷1800	50
		СЛО.02.01	1200÷1700	1200÷1400	1400÷1800	1400÷1800	50
2.3	Стол лабораторный островной, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛО.03.00	1500÷1700	1200÷1400	750÷950	750÷950	50
		СЛО.03.01	1500÷1700	1200÷1400	750÷950	750÷950	50
		СЛО.03.02	1500÷1700	1200÷1400	750÷950	750÷950	50
2.4	Стол лабораторный островной, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛО.04.00	2700÷3000	1200÷1400	1400÷1800	1400÷1800	50
		СЛО.04.01	3700÷4000	1200÷1400	1400÷1500	1400÷1500	50
3. НАДСТРОЙКИ ДЛЯ СТОЛА (принадлежности к столам лабораторным и столам лабораторным островным)							
3.1	Надстройка для стола, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛН.01.00	945÷1445	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.01.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.01.01	945÷1445	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.01.01 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.01.02	945÷1445	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.01.02 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типораз- мерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	Надстройка для стола, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛН.02.00	945÷1445	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.02.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
3.3	Надстройка для стола, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛН.03.00	945÷1445	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.03.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.03.01	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.03.01 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
3.4	Надстройка для стола, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛН.04.00	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.04.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
3.5	Надстройка для стола, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛН.05.00	945÷1445	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.05.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
4. СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ ВЕСОВ							
4.1	Стол лабораторный для весов, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛВ.01.00	800÷1200	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
5. СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ С МОЙКОЙ							
5.1	Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛМ.01.00	550÷650	600÷750	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	5
		СЛМ.01.01	600÷900	600÷900	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	5
5.2	Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛМ.02.00	850÷1000	600÷750	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	5
		СЛМ.02.01	850÷1000	600÷750	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	5
		СЛМ.02.02	1200÷1500	600÷750	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	5
		СЛМ.02.03	1200÷1500	600÷750	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	5
6. СТОЛЫ - ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ							
6.1	Стол-тумба лабораторный, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СТ.01.00	1300÷1600	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТ.01.01	1300÷1600	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТ.01.02	1300÷1600	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТ.01.03	1300÷1600	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТ.01.04	1300÷1600	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТ.01.05	1300÷1600	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТ.01.06	1300÷1600	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типораз- мерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	Стол-тумба лабораторный, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптимал/ Элит	СТ.01.07	1300÷1600	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТу.01.08	600÷900	600÷900	750÷950	750÷950	50
		СТ.02.00	800÷1100	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТ.02.01	800÷1100	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТ.02.02	800÷1100	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТ.02.03	800÷1100	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТ.02.04	800÷1100	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТ.02.05	800÷1100	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТ.02.06	800÷1100	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТ.02.07	800÷1100	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТ.02.08	800÷1100	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СТ.02.09	800÷1100	500÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
7. СТОЛИКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОДКАТНЫЕ							
7.1	Столик лабораторный подкатной	СИЛ.01.00	550÷750	400÷500	750÷950	750÷950	25
		СИЛ.01.01	550÷750	400÷500	750÷950	750÷950	25
8. ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ							
8.1	Тумба лабораторная стационарная, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптимал/ Элит	ТЛс.01.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛс.02.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛс.03.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛс.04.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛс.05.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛс.06.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛс.07.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛс.08.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛс.09.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
9. ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОДКАТНЫЕ							
9.1	Тумба лабораторная подкатная, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптимал/ Элит	ТЛп.01.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛп.02.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛп.03.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛп.04.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛп.05.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛп.06.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛп.07.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛп.08.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
		ТЛп.09.00	400÷600	400÷600	750÷950	-	25
10. ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ							
10.1	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Стандарт плюс	ШВ.01.00	1000÷1200	600÷800	2000÷2200	880	50
		ШВ.01.01	1000÷1200	600÷800	2000÷2200	880	50
10.2	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Стандарт плюс	ШВ.02.00	1000÷1200	600÷800	2000÷2200	880	50
		ШВ.02.01	1000÷1200	600÷800	2000÷2200	880	50
10.3		ШВ.01.00А	1000÷1500	700÷800	2000÷2200		50

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типораз- мерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Оптима/ Элит	ШВ.01.01А	1000÷1500	700÷800	2000÷2200	для серии Оптима: 875; для серии Элит: 850	50
10.4	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Оптима/ Элит	ШВ.02.00А	1000÷1500	700÷800	2000÷2200		50
		ШВ.02.01А	1000÷1500	700÷800	2000÷2200		50
11. ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ							
11.1	Шкаф лабораторный, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	ШЛ.01.00	400÷600	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.01.01	400÷600	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.01.02	400÷600	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.01.03	400÷600	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.01.04	400÷600	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.01.05	400÷600	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.01.06	400÷600	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.01.07	400÷600	350÷600	1700÷2000	-	25
11.2	Шкаф лабораторный, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	ШЛ.01.08	400÷600	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.02.00	800÷1000	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.02.01	800÷1000	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.02.02	800÷1000	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.02.03	800÷1000	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.02.04	800÷1000	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.02.05	800÷1000	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.02.06	800÷1000	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.02.07	800÷1000	350÷600	1700÷2000	-	25
		ШЛ.02.08	800÷1000	350÷600	1700÷2000	-	25
12. ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ НАВЕСНЫЕ							
12.1	Шкаф лабораторный навесной, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	ШН.01.00	400÷550	300÷400	400÷600	-	50
		ШН.01.01	400÷550	300÷400	400÷600	-	50
		ШН.01.02	400÷550	300÷400	400÷600	-	50
		ШНУ.01.00	600÷900	600÷900	400÷600	-	50
12.2	Шкаф лабораторный навесной, серии Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	ШН.02.00	800÷1200	300÷400	400÷600	-	50
		ШН.02.01	800÷1200	300÷400	400÷600	-	50
		ШН.02.02	800÷1200	300÷400	400÷600	-	50
13. СУШИЛКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ							
13.1	Сушилка для лабораторной посуды	СП.01.00	400÷600	160÷260	700÷900	-	20

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8); габаритные размеры для изделий одной модели, изготовленных в исполнениях серии Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, одинаковые, за исключением размеров, помеченных (**) или (***)

**-габаритная высота изделия серии Стандарт/Стандарт плюс/Оптима;

***- габаритная высота изделия серии Элит.

2.4. Масса изделий набора приведена в Таблице 3.

Таблица 3. Масса изделий набора

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг				
			-	Серия Стандарт	Серия Стандарт плюс	Серия Оптимa	Серия Элит
1	2	3	4	5	6	7	8
1. СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ							
1.1	Стол лабораторный	СЛ.00.00	-	57	68	52	72
		СЛ.00.01	-	82	94	73	99
		СЛ.01.00	-	90	98	85	101
		СЛ.01.01	-	76	89	71	94
		СЛ.01.02	-	93	106	86	111
		СЛ.01.03	-	108	120	111	126
1.2	Стол лабораторный	СЛ.02.00	-	155	170	147	177
		СЛ.02.01	-	130	145	120	152
		СЛ.02.02	-	107	122	98	129
1.3	Стол лабораторный	СЛ.03.00	-	198	223	190	232
		СЛ.03.01	-	176	201	163	210
		СЛ.03.02	-	156	181	145	190
		СЛ.03.03	-	224	249	194	259
1.4	Стол лабораторный	СЛ.04.00	-	87	102	74	107
2. СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ							
2.1	Стол лабораторный островной	СЛО.01.00	-	112	135	90	141
		СЛО.01.01	-	140	163	112	169
2.2	Стол лабораторный островной	СЛО.02.00	-	158	190	138	196
		СЛО.02.01	-	229	261	205	270
2.3	Стол лабораторный островной	СЛО.03.00	-	214	244	195	258
		СЛО.03.01	-	260	290	240	300
		СЛО.03.02	-	310	340	294	354
2.4	Стол лабораторный островной	СЛО.04.00	-	404	452	385	470
		СЛО.04.01	-	605	680	575	698
3. НАДСТРОЙКИ ДЛЯ СТОЛА (принадлежности к столам лабораторным и столам лабораторным островным)							
3.1	Надстройка для стола	СЛН.01.00	-	25	28	25	29
		СЛН.01.00 (мод.1)	-	28	31	28	32
		СЛН.01.01	-	29	31	30	35
		СЛН.01.01 (мод.1)	-	32	34	33	38
		СЛН.01.02	-	30	33	28	34
		СЛН.01.02 (мод.1)	-	36	39	34	40
3.2	Надстройка для стола	СЛН.02.00	-	39	42	35	43
		СЛН.02.00 (мод.1)	-	47	50	43	51
3.3	Надстройка для стола	СЛН.03.00	-	43	46	41	47
		СЛН.03.00 (мод.1)	-	51	54	43	55
		СЛН.03.01	-	47	50	45	51
		СЛН.03.01 (мод.1)	-	57	61	43	63
3.4	Надстройка для стола	СЛН.04.00	-	61	65	49	67
		СЛН.04.00 (мод.1)	-	62	66	55	67
3.5	Надстройка для стола	СЛН.05.00	-	61	65	55	67
		СЛН.05.00 (мод.1)	-	74	78	66	80
4. СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ ВЕСОВ							
4.1	Стол лабораторный для весов	СЛВ.01.00	-	135	145	129	148

Продолжение таблицы 3

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг				
			-	Серия Стандарт	Серия Стандарт плюс	Серия Оптима	Серия Элит
1	2	3	4	5	6	7	8
5. СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ С МОЙКОЙ							
5.1	Стол лабораторный с мойкой	СЛМ.01.00	-	42	52	35	55
		СЛМ.01.01	-	71	83	67	89
5.2	Стол лабораторный с мойкой	СЛМ.02.00	-	53	64	43	68
		СЛМ.02.01	-	74	84	61	89
		СЛМ.02.02	-	88	102	75	107
		СЛМ.02.03	-	112	125	96	131
6. СТОЛЫ - ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ							
6.1	Стол-тумба лабораторный	СТ.01.00	-	169	184	160	188
		СТ.01.01	-	142	157	138	161
		СТ.01.02	-	133	148	131	152
		СТ.01.03	-	175	190	192	194
		СТ.01.04	-	124	139	117	143
		СТ.01.05	-	133	148	130	152
		СТ.01.06	-	169	184	163	188
		СТ.01.07	-	180	195	170	199
6.2	Стол-тумба лабораторный	СТу.01.08	-	85	97	80	100
		СТ.02.00	-	135	147	128	151
		СТ.02.01	-	126	140	119	144
		СТ.02.02	-	103	115	98	119
		СТ.02.03	-	82	94	74	98
		СТ.02.04	-	95	107	86	111
		СТ.02.05	-	82	94	72	98
		СТ.02.06	-	98	110	97	114
		СТ.02.07	-	111	123	107	127
		СТ.02.08	-	105	117	82	121
		СТ.02.09	-	95	107	82	111
7. СТОЛИКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОДКАТНЫЕ							
7.1	Столик лабораторный подкатной	СИЛ.01.00	24	-	-	-	-
		СИЛ.01.01	28	-	-	-	-
8. ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ							
8.1	Тумба лабораторная стационарная	ТЛс.01.00	-	41	46	39	48
		ТЛс.02.00	-	41	46	39	48
		ТЛс.03.00	-	69	74	50	76
		ТЛс.04.00	-	74	79	57	81
		ТЛс.05.00	-	51	56	41	58
		ТЛс.06.00	-	62	67	46	69
		ТЛс.07.00	-	58	63	48	65
		ТЛс.08.00	-	53	58	39	60
		ТЛс.09.00	-	46	51	44	53
9. ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОДКАТНЫЕ							
9.1	Тумба лабораторная подкатная	ТЛп.01.00	-	44	49	39	51
		ТЛп.02.00	-	44	49	41	51
		ТЛп.03.00	-	66	71	50	73
		ТЛп.04.00	-	64	69	57	71
		ТЛп.05.00	-	51	56	41	58
		ТЛп.06.00	-	62	67	46	69
		ТЛп.07.00	-	60	65	48	67
		ТЛп.08.00	-	53	58	39	60
		ТЛп.09.00	-	48	53	44	55
10. ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ							
10.1	Шкаф лабораторный вытяжной	ШВ.01.00	-	-	178	-	-
		ШВ.01.01	-	-	185	-	-
10.2	Шкаф лабораторный вытяжной	ШВ.02.00	-	-	185	-	-
		ШВ.02.01	-	-	188	-	-

Продолжение таблицы 3

Продолжение таблицы 5							
№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг				
			-	№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг
1	2	3	4	1	2	3	4
10.3	Шкаф лабораторный вытяжной	ШВ.01.00А	-	-	-	157	227
		ШВ.01.01А	-	-	-	157	227
10.4	Шкаф лабораторный вытяжной	ШВ.02.00А	-	-	-	185	221
		ШВ.02.01А	-	-	-	182	252
11. ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ							
11.1	Шкаф лабораторный	ШЛ.01.00	-	83	103	72	109
		ШЛ.01.01	-	68	88	64	94
		ШЛ.01.02	-	53	73	49	79
		ШЛ.01.03	-	83	103	76	109
		ШЛ.01.04	-	53	73	49	79
		ШЛ.01.05	-	106	126	99	132
		ШЛ.01.06	-	93	113	85	119
		ШЛ.01.07	-	70	90	64	96
11.2	Шкаф лабораторный	ШЛ.01.08	-	83	103	74	109
		ШЛ.02.00	-	123	157	107	164
		ШЛ.02.01	-	116	140	93	147
		ШЛ.02.02	-	112	136	90	144
		ШЛ.02.03	-	117	141	114	148
		ШЛ.02.04	-	112	138	109	145
		ШЛ.02.05	-	158	182	149	189
		ШЛ.02.06	-	155	179	156	186
		ШЛ.02.07	-	95	119	91	126
		ШЛ.02.08	-	125	149	105	156
12. ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ НАВЕСНЫЕ							
12.1	Шкаф лабораторный навесной	ШН.01.00	-	19	24	16	27
		ШН.01.01	-	16	21	13	22
		ШН.01.02	-	15	20	12	22
		ШНУ.01.00	-	66	71	57	74
12.2	Шкаф лабораторный навесной	ШН.02.00	-	40	47	30	50
		ШН.02.01	-	38	45	33	48
		ШН.02.02	-	25	35	25	37
13. СУШИЛКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ							
13.1	Сушилка для лабораторной посуды	СП.01.00	18	-	-	-	-

2.5. Столешницы столов, тумб, шкафов вытяжных, полки и дно выдвижных ящиков выдерживают предельную рабочую равномерно-распределенную нагрузку, указанную в Таблице 4.

Таблица 4. Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка

№	Наименование изделия набора			Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Серия	Модель	
1	Стол лабораторный	Стандарт	СЛ.00.00, СЛ.00.01, СЛ.04.00	- на столешницу – 70 - на дно ящика – 10
		Стандарт плюс		
		Оптим		
		Элит		
2	Стол лабораторный	Стандарт	СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02;	- на столешницу – 100 - на полку и дно ящика – 10
		Стандарт плюс	СЛ.01.03; СЛ.02.00; СЛ.02.01;	
		Оптим	СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01;	
		Элит	СЛ.03.02; СЛ.03.03	

Продолжение таблицы 4

№	Наименование изделия набора			Предельная равномерно- распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Серия	Модель	
3	Стол лабораторный островной	Стандарт	СЛО.01.00; СЛО.01.01;	- на столешницу – 100 - на полку и дно ящика – 10
		Стандарт плюс	СЛО.02.00; СЛО.02.01;	
		Оптимa	СЛО.03.00; СЛО.03.01;	
		Элит	СЛО.03.02; СЛО.04.00	
4	Принадлежность: Надстройка для стола	Стандарт	СЛН.01.00, СЛН.01.00 (мод.1),	- на полку - 10
		Стандарт плюс	СЛН.01.01, СЛН.01.01 (мод.1),	
		Оптимa	СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1),	
		Элит	СЛН.02.00, СЛН.02.00 (мод.1), СЛН.03.00, СЛН.03.00 (мод.1), СЛН.03.01, СЛН.03.01 (мод.1), СЛН.04.00, СЛН.04.00 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1)	
5	Стол лабораторный для весов	Стандарт	СЛВ.01.00	- на столешницу – 70 - на платформу для весов - 200 - на дно ящика – 10
		Стандарт плюс		
		Оптимa		
		Элит		
6	Стол лабораторный с мойкой	Стандарт	СЛМ.01.00; СЛМ.01.01;	- на столешницу – 70 - на полку и дно ящика – 10 - на мойку -10
		Стандарт плюс	СЛМ.02.00; СЛМ.02.01;	
		Оптимa	СЛМ.02.02;	
		Элит	СЛМ.02.03	
7	Стол-тумба лабораторный	Стандарт	СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02;	- на столешницу – 100 - на полку и дно ящика – 10
		Стандарт плюс	СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05;	
		Оптимa	СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08;	
		Элит	СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09	
8	Столик лабораторный подкатной	-	СИЛ.01.00; СИЛ.01.01	- на полку и дно ящика – 5
9	Тумба лабораторная стационарная	Стандарт	ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00;	- на столешницу – 30 - на полку и дно ящика – 10
		Стандарт плюс	ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00;	
		Оптимa	ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00	
		Элит		
10	Тумба лабораторная подкатная	Стандарт	ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00;	- на столешницу – 30 - на полку и дно ящика – 10
		Стандарт плюс	ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00;	
		Оптимa	ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00	
		Элит		
11	Шкаф лабораторный вытяжной	Стандарт плюс	ШВ.01.00; ШВ.01.01; ШВ.02.00;	- на столешницу – 20 - на полку – 10
		Оптимa	ШВ.02.01	
		Элит	ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А	
12	Шкаф лабораторный	Стандарт	ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02;	- на полку и дно ящика – 10
		Стандарт плюс	ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05;	
		Оптимa	ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08;	
		Элит	ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08	
	Шкаф лабораторный навесной	Стандарт	ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02;	- на полку – 10
		Стандарт плюс	ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01;	
		Оптимa	ШН.02.02	
		Элит		
13	Сушилка для лабораторной посуды	-	СП.01.00	- на полку (поддон) – 5 - на штифт -1

- 2.6. Покоробленность дверей мебели составляет не более 1,2 мм.
- 2.7. Зазоры в проемах дверей на сторону составляют не более 4,0 мм.
- 2.8. Устойчивость шкафов соответствует ГОСТ 16371.
- 2.9. Замки дверей шкафов и ящиков тумб (при наличии) обеспечивают надежное, легкое запирание и открывание, плотное прилегание дверей к корпусу шкафа.
- 2.10. Петли дверей имеют амортизаторы, обеспечивающие их плавное, без перекосов открывание и закрывание с усилием не более 20 Н (2 кгс).
- 2.11. Двери изделий набора имеют устройство, предотвращающее их самопроизвольное открывание.
- 2.12. Выдвижные ящики имеют устройство, предотвращающее их выпадение из корпуса при выдвигании.
- Выдвигание ящиков осуществляется по роликовым или телескопическим направляющим плавно, без заеданий и перекосов.
- Усилие выдвигания ящиков - не более 15 Н.
- 2.13. Рабочая камера шкафов вытяжных закрывается вертикальной подвижной дверцей. Перемещение дверцы должно осуществляться без перекосов и заеданий. Усилие, прилагаемое при подъеме дверцы - не более 80 Н.
- Дверца рабочей камеры имеет упор для предотвращения ее выпадения в верхнем положении.
- 2.14. Шкаф лабораторный вытяжной снабжен светодиодным светильником типа PLED-T5i PL, номинальной потребляемой мощностью 8-10 Вт, электропитание: 230 В ($\pm 10\%$), (50 ± 1) Гц. Освещенность, создаваемая светильником в центре поверхности рабочей зоны вытяжного шкафа - не менее 300 лк.
- 2.15. На шкафах лабораторных вытяжных всех исполнений и моделей, столах лабораторных островных моделей СЛО.01.00, СЛО.01.01, СЛО.02.00, СЛО.02.01, надстройках для стола моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) установлены розетки с заземляющим контактом и защитной крышкой для подключения потребителей электропитания от внешней однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 В.
- Шкафы лабораторные вытяжные серии Стандарт плюс, серии Оптима; столы лабораторные островные моделей СЛО.01.00, СЛО.01.01, СЛО.02.00, СЛО.02.01, надстройки для стола моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) имеют по 1 розетке.
- Шкафы лабораторные вытяжные серии Элит оснащены 2 розетками.
- На шкафах лабораторных вытяжных серии Элит установлен автоматический выключатель дифференциального тока типа АВДТ32 с номинальным током 16 А.
- 2.16 Номинальная потребляемая мощность шкафов лабораторных вытяжных серии Стандарт плюс и серии Оптима (без учета электропотребителей, подсоединяемых к розетке шкафа) - в диапазоне 21-30 Вт.
- Максимальная номинальная потребляемая мощность шкафов лабораторных вытяжных серии Стандарт плюс и серии Оптима с учетом электропотребителей, подсоединяемых к розетке шкафа - не более 2,25 кВт.
- Номинальная потребляемая мощность шкафов лабораторных вытяжных серии Элит (без учета электропотребителей, подсоединяемых к розеткам шкафа) - в диапазоне 85 Вт ($\pm 10\%$).
- Максимальная номинальная потребляемая мощность шкафов лабораторных вытяжных серии Элит с учетом электропотребителей, подсоединяемых к розетке шкафа - не более 3,3 кВт.
- 2.17 Розетка столов лабораторных островных моделей СЛО.01.00, СЛО.01.01, СЛО.02.00, СЛО.02.01, надстроек для столов моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) работоспособна при подключении электропотребителя с максимальной номинальной потребляемой мощностью не более 2,2 кВт.
- Розетка шкафов лабораторных вытяжных всех моделей серии Стандарт плюс и серии Оптима работоспособна при подключении электропотребителя с максимальной номинальной потребляемой мощностью не более 2,2 кВт.
- Розетки шкафов лабораторных вытяжных всех моделей серии Элит работоспособны при подключении электропотребителей с суммарной максимальной номинальной потребляемой мощностью не более 3,2 кВт.
- 2.18. Вытяжное устройство шкафов лабораторных вытяжных имеет воздуховод (патрубок вентилятора) для присоединения к централизованной вентиляционной системе. Присоединительный (наружный) диаметр патрубка вентилятора равен значению, указанному в таблице 5.

Вытяжное устройство шкафов лабораторных вытяжных имеет вентилятор, отвечающий требованиям, приведенным в таблице 5.

Таблица 5. Основные характеристики вытяжного устройства

Наименование характеристики вентилятора	Шкафы лабораторные вытяжные		
	серия Стандарт плюс, модели: ШВ.01.00; ШВ.01.01; ШВ.02.00; ШВ.02.01	серия Оптима, модели: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А	серия Элит, модели: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А
Присоединительный (наружный) диаметр патрубка вентилятора	(125±1) мм		(125±1) мм
Номинальная потребляемая мощность вентилятора, Вт	16±2		70±8
Номинальная производительность по объему перемещаемого воздуха, м³/ч	184±5		400±10
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБА	Не более 40		Не более 40

2.19. Характеристики кабеля питания шкафов лабораторных вытяжных соответствуют указанным в таблице 6.

Таблица 6. Характеристики кабеля питания шкафов лабораторных вытяжных.

Параметр	Значение
Тип провода кабеля питания	3х1,5 мм², с двойной изоляцией или 3х2,5 мм², с двойной изоляцией
Длина кабеля (с вилкой), мм	2000±200
Тип вилки	Евровилка, 230 В, 50Гц

Кабель питания шкафов лабораторных вытяжных должен быть несъемным.

2.20. Тумбы лабораторные подкатные, столик лабораторный подкатной устанавливаются на колесные опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Диаметр колес - 50±2 мм или 75±2.

Столы лабораторные, столы лабораторные островные, столы лабораторные для весов, столы лабораторные с мойкой, столы-тумбы лабораторные, тумбы лабораторные стационарные, шкафы лабораторные вытяжные, шкафы лабораторные установлены на неподвижные опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Неподвижные опоры изделий (за исключением опор шкафов лабораторных вытяжных моделей ШВ.01.00; ШВ.01.01; ШВ.02.00; ШВ.02.01) имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию.

Зазор между полом и одной из опор - не более 3 мм.

2.21. Перемещение на колесных опорах по ровной горизонтальной поверхности должно осуществляться плавно, без заеданий. Усилие перемещения на колесных опорах - не более 50 Н (5 кгс).

2.22. Изделия набора, имеющие дверцы и/или выдвижные ящики, не перемещаются при открывании их дверей или выдвигании ящиков.

2.23. Поверхности изделий набора не имеют вмятин, царапин, трещин, сколов, потертостей, отслоений, вздутий покрытий, клеевых пятен, следов коррозии и других дефектов.

2.24. Металлические и неметаллические неорганические покрытия изделий набора однотонные, без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и соответствуют требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I.

2.25. Наружные поверхности изделий набора устойчивы к дезинфекции в соответствии с режимами методических указаний МУ-287-113.

В качестве средств дезинфекции должны быть использованы разрешенные для этих целей в установленном порядке химические средства.

Наружные поверхности изделий набора устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХВ по ГОСТ 14193 или раствором 3 % перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644.

2.26. Столы лабораторные островные моделей СЛО.01.00, СЛО.01.01, СЛО.02.00, СЛО.02.01, надстройки для стола моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) готовы к работе после монтажа и присоединения к электросети (не требуется время для установления выхода на рабочий режим).

Шкафы лабораторные вытяжные исполнений серии Стандарт и Оптима готовы к работе после включения в электросеть и включения клавиши «вкл».

Шкафы лабораторные вытяжные серии Элит готовы к работе после включения в электросеть, включения автоматического выключателя дифференциального тока и включения клавиши «вкл».

Максимально допустимое время установления рабочего режима после включения составляет 10 сек.

3 Маркировка

3.1 Маркировка изделий набора соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-2020, и ТУ 9452-001-68690950-2011. Символы на маркировке соответствуют ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020.

3.2 На каждом изделии набора прикреплена табличка по ГОСТ 12969-67, на которой указано:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- адрес места производства;
- наименование набора;
- наименование и обозначение изделия, входящего в набор;
- габаритные размеры (мм);
- дата изготовления (месяц и год в формате: XX.XXXX);
- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- обозначения технических условий;
- гарантийный срок хранения – 6 мес.;
- гарантийный срок эксплуатации – 12 мес.;
- срок службы – 8 лет;

3.3 Маркировка шкафов лабораторных вытяжных всех моделей, столов лабораторных островных моделей СЛО.01.00, СЛО.01.01, СЛО.02.00, СЛО.02.01, надстроек для стола моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) также соответствует ГОСТ IEC 61010-1 и содержит сведения:

- номинальное напряжение сети электропитания в вольтах (В);
- номинальная частота сети электропитания в герцах (Гц);
- номинальный ток в амперах (А) и/или
- максимальная номинальная потребляемая мощность в ваттах (Вт) или в вольтамперах (ВА) (с учетом подключаемых к розетке (розеткам) потребителей);
- степень защиты, обеспечиваемой оболочками, от проникновения твердых предметов и от проникновения воды в соответствии с ГОСТ 14254.
- автоматический выключатель дифференциального тока имеет маркировку «Сеть»; маркировку положения «Включено» и/или знак «I» по ГОСТ IEC 61010-1 (таблица 1, знак Включено (питание) 9); маркировку «Выключено» и/или знак «O» по ГОСТ IEC 61010-1 (таблица 1, знак Выключено (питание) 10);

3.4 Клавиша включения светильника и вытяжного устройства шкафов лабораторных вытяжных имеет маркировку «Вкл.» и «Выкл.».

3.5 Розетка шкафов лабораторных вытяжных серии Стандарт плюс, серии Оптима; столов лабораторных островных моделей СЛО.01.00, СЛО.01.01, СЛО.02.00, СЛО.02.01, надстроек для стола моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) маркируется с указанием следующего:

- номинальное напряжение сети электропитания 230 В;
- номинальная частота переменного тока 50 Гц и/или знак «Переменный ток» по ГОСТ IEC 61010-1 (таблица 1, знак 2);
- максимальный номинальный ток в амперах или максимальная номинальная мощность в ваттах или вольт-амперах; или

- знак «Внимание опасность» по ГОСТ IEC 61010-1 (таблица 1, знак 14) таким образом, чтобы он был заметен при нормальной эксплуатации, отдельно, либо в сочетании с указанием максимально допустимого тока или максимальной номинальной мощности.

3.6 Сетевой соединитель из двух розеток (блок розеток) шкафов лабораторных вытяжных серии Элит маркируется:

- знаком безопасности «Общий знак предупреждения» по ГОСТ IEC 61010-1 (таблица 1, знак безопасности 14) таким образом, чтобы он был заметен при нормальной эксплуатации, в сочетании с указанием максимально допустимого тока или выходной мощности в амперах или вольт-амперах;
- каждая розетка маркируется с указанием следующего:
 - номинальное напряжение сети электропитания 230 В;
 - номинальная частота переменного тока 50 Гц и/или знак «Переменный ток» по ГОСТ IEC 61010-1 (таблица 1, знак 2).

3.7 Транспортная маркировка выполнена по ГОСТ 14192–96. На транспортную тару нанесена маркировка, содержащая:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование набора;
- наименование и обозначение изделия, входящего в набор;
- месяц и год упаковывания;
- массы брутто и нетто грузового места в килограммах;
- габаритные размеры грузового места в сантиметрах;
- количество грузовых мест;
- условия хранения и транспортирования.

Маркировку наносят на бумажный ярлык. Переменные данные на ярлыке могут быть заполнены от руки и разборчиво.

На транспортную упаковку нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Не кантовать», «Беречь от влаги», «Верх».

Транспортная упаковка изделий, имеющих стеклодетали, должны маркироваться знаком «Хрупкое. Осторожно!».

3.8 Символы и обозначения, используемые на маркировке изделия:

230 В	Номинальное напряжение сети электропитания в вольтах (В)
50 Гц	Номинальная частота сети электропитания в герцах (Гц)
-	Переменный ток
IP44	Степень защиты, обеспечиваемой оболочками, от проникновения твердых предметов и от проникновения воды в соответствии с ГОСТ 14254
	«Внимание опасность»
	Изготовитель (наименование и адрес изготовителя)
	Дата изготовления (месяц и год, в формате: XX.XXXX)

3.9 Манипуляционные знаки, нанесенные на транспортную упаковку:

			
«Не кантовать»	«Беречь от влаги»	«Верх»	«Хрупкое, осторожно!»

4 Комплектность

4.1 Комплект поставки набора мебели должен соответствовать указанному в таблицах 7-11.

Таблица 7. Комплектность медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клиничко-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011», исполнения «Набор мебели медицинской для клиничко-диагностических лабораторий «Стандарт»

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Набор мебели медицинской для клиничко-диагностических лабораторий «Стандарт», в составе:	АСК.001.00011.С	1
1.1	Стол лабораторный, вариант исполнения*:		1
1.1.1	Стол лабораторный, серия Стандарт, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе:	СЛ.00.00.С; СЛ.00.01.С; СЛ.01.00.С; СЛ.01.01.С; СЛ.01.02.С; СЛ.01.03.С; СЛ.04.00.С	
	- Стол лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт – 1 шт., модели: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.С; СЛН.01.01.С; СЛН.01.02.С; СЛН.02.00.С; СЛН.03.00.С; СЛН.03.01.С; СЛН.04.00.С; СЛН.05.00.С	
1.1.2	Стол лабораторный, серия Стандарт, модели: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе:	СЛ.02.00.С; СЛ.02.01.С; СЛ.02.02.С; СЛ.03.00.С; СЛ.03.01.С; СЛ.03.02.С; СЛ.03.03.С	
	- Стол лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1).С; СЛН.01.01 (мод.1).С; СЛН.01.02 (мод.1).С; СЛН.02.00 (мод.1).С; СЛН.03.00 (мод.1).С; СЛН.03.01 (мод.1).С; СЛН.04.00 (мод.1).С; СЛН.05.00 (мод.1).С	
1.2	Шкаф лабораторный, вариант исполнения*:		1
1.2.1	Шкаф лабораторный, серия Стандарт, модели: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08, в составе:	ШЛ.01.00.С; ШЛ.01.01.С; ШЛ.01.02.С; ШЛ.01.03.С; ШЛ.01.04.С; ШЛ.01.05.С; ШЛ.01.06.С; ШЛ.01.07.С; ШЛ.01.08.С; ШЛ.02.00.С; ШЛ.02.01.С; ШЛ.02.02.С; ШЛ.02.03.С; ШЛ.02.04.С; ШЛ.02.05.С; ШЛ.02.06.С; ШЛ.02.07.С; ШЛ.02.08.С	
	- Шкаф лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Стол лабораторный островной, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.3.1	Стол лабораторный островной, серия Стандарт, модели: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01, в составе:	СЛО.01.00.С; СЛО.01.01.С; СЛО.02.00.С; СЛО.02.01.С; СЛО.04.00.С; СЛО.04.01.С	
	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	

Продолжение таблицы 7

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.3.2	Стол лабораторный островной, серия Стандарт, модели: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02, в составе:	СЛО.03.00.С; СЛО.03.01.С; СЛО.03.02.С	
	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1).	СЛН.01.00 (мод.1).С; СЛН.01.01 (мод.1).С; СЛН.01.02 (мод.1).С; СЛН.02.00 (мод.1).С; СЛН.02.00 (мод.1).С; СЛН.03.00 (мод.1).С; СЛН.03.01 (мод.1).С; СЛН.04.00 (мод.1).С; СЛН.05.00 (мод.1).С	
1.4	Стол лабораторный для весов, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.4.1	Стол лабораторный для весов, серия Стандарт, модель: СЛВ.01.00, в составе:	СЛВ.01.00.С	
	- Стол лабораторный для весов – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛВ.00.00 ПС.02	
1.5	Стол лабораторный с мойкой, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.5.1	Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.С; СЛМ.01.01.С; СЛМ.02.00.С; СЛМ.02.01.С; СЛМ.02.02.С; СЛМ.02.03.С	
	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	
1.6	Стол-тумба лабораторный, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.6.1	Стол-тумба лабораторный, серия Стандарт, модели: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09, в составе:	СТ.01.00.С; СТ.01.01.С; СТ.01.02.С; СТ.01.03.С; СТ.01.04.С; СТ.01.05.С; СТ.01.06.С; СТ.01.07.С; СТ.01.08.С; СТ.02.00.С; СТ.02.01.С; СТ.02.02.С; СТ.02.03.С; СТ.02.04.С; СТ.02.05.С; СТ.02.06.С; СТ.02.07.С; СТ.02.08.С; СТ.02.09.С	
	- Стол -тумба лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СТ.00.00 ПС.02	
1.7	Столик лабораторный подкатной *:		1 (при необходимости)
1.7.1	Столик лабораторный подкатной модели: СИЛ.01.00; СИЛ.01.01 – 1 шт., в составе:	СИЛ.01.00; СИЛ.01.01	
	- Столик лабораторный подкатной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СИЛ.00.00 ПС.02	
1.8	Тумба лабораторная стационарная, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.8.1	Тумба лабораторная стационарная, серия Стандарт, модели: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00, в составе:	ТЛс.01.00.С; ТЛс.02.00.С; ТЛс.03.00.С; ТЛс.04.00.С; ТЛс.05.00.С; ТЛс.06.00.С; ТЛс.07.00.С; ТЛс.08.00.С; ТЛс.09.00.С	
	- Тумба лабораторная стационарная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ТЛс.00.00 ПС.02	

Продолжение таблицы 7

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.9	Тумба лабораторная подкатная, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.9.1	Тумба лабораторная подкатная, серия Стандарт, модели: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00, в составе:	ТЛп.01.00.С; ТЛп.02.00.С; ТЛп.03.00.С; ТЛп.04.00.С; ТЛп.05.00.С; ТЛп.06.00.С; ТЛп.07.00.С; ТЛп.08.00.С; ТЛп.09.00.С	
	- Тумба лабораторная подкатная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ТЛп.00.00 ПС.02	
1.10	Шкаф лабораторный навесной, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.10.1	Шкаф лабораторный навесной, серия Стандарт, модели: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02, в составе:	ШН.01.00.С; ШН.01.01.С; ШН.01.02.С; ШНу.01.00.С; ШН.02.00.С; ШН.02.01.С; ШН.02.02.С	
	- Шкаф лабораторный навесной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШН.00.00 ПС.02	
1.11	Сушилка для лабораторной посуды		1 (при необходимости)
1.11.1	Сушилка для лабораторной посуды, модель: СП.01.00, в составе:	СП.01.00	
	- Сушилка для лабораторной посуды – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СП.00.00 ПС.02	
1.12	Руководство по эксплуатации	НКДЛ.00.00 РЭ.03	1

Примечание:

*- исполнение и модель выбираются по требованию.

Таблица 8. Комплектность медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинко-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011», исполнения «Набор мебели медицинской для клинко-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Набор мебели медицинской для клинко-диагностических лабораторий «Стандарт плюс», в составе:	АСК.001.00011.Сп	1
1.1	Тумба лабораторная подкатная, вариант исполнения*:		1
1.1.1	Тумба лабораторная подкатная, серия Стандарт плюс, модели: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00, в составе:	ТЛп.01.00.Сп; ТЛп.02.00.Сп; ТЛп.03.00.Сп; ТЛп.04.00.Сп; ТЛп.05.00.Сп; ТЛп.06.00.Сп; ТЛп.07.00.Сп; ТЛп.08.00.Сп; ТЛп.09.00.Сп	
	- Тумба лабораторная подкатная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.		
1.2	Шкаф лабораторный, вариант исполнения*:		1
1.2.1	Шкаф лабораторный, серия Стандарт плюс, модели: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08, в составе:	ШЛ.01.00.Сп; ШЛ.01.01.Сп; ШЛ.01.02.Сп; ШЛ.01.03.Сп; ШЛ.01.04.Сп; ШЛ.01.05.Сп; ШЛ.01.06.Сп; ШЛ.01.07.Сп; ШЛ.01.08.Сп; ШЛ.02.00.Сп; ШЛ.02.01.Сп; ШЛ.02.02.Сп; ШЛ.02.03.Сп; ШЛ.02.04.Сп; ШЛ.02.05.Сп; ШЛ.02.06.Сп; ШЛ.02.07.Сп; ШЛ.02.08.Сп	
	- Шкаф лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШЛ.00.00 ПС.02	

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.3	Стол лабораторный, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.3.1	Стол лабораторный, серия Стандарт плюс, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе:	СЛ.00.00.Сп; СЛ.00.01.Сп; СЛ.01.00.Сп; СЛ.01.01.Сп; СЛ.01.02.Сп; СЛ.01.03.Сп; СЛ.04.00.Сп	
	- Стол лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт плюс – 1 шт., модели: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.Сп; СЛН.01.01.Сп; СЛН.01.02.Сп; СЛН.02.00.Сп; СЛН.03.00.Сп; СЛН.03.01.Сп; СЛН.04.00.Сп; СЛН.05.00.Сп	
1.3.2	Стол лабораторный, серия Стандарт плюс, модели: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе:	СЛ.02.00.Сп; СЛ.02.01.Сп; СЛ.02.02.Сп; СЛ.03.00.Сп; СЛ.03.01.Сп; СЛ.03.02.Сп; СЛ.03.03.Сп	
	- Стол лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт плюс – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1).Сп; СЛН.01.01 (мод.1).Сп; СЛН.01.02 (мод.1).Сп; СЛН.02.00 (мод.1).Сп; СЛН.03.00 (мод.1).Сп; СЛН.03.01 (мод.1).Сп; СЛН.04.00 (мод.1).Сп; СЛН.05.00 (мод.1).Сп	
1.4	Стол лабораторный островной, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.4.1	Стол лабораторный островной, серия Стандарт плюс, модели: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01, в составе:	СЛО.01.00.Сп; СЛО.01.01.Сп; СЛО.02.00.Сп; СЛО.02.01.Сп; СЛО.04.00.Сп; СЛО.04.01.Сп	
	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
1.4.2	Стол лабораторный островной, серия Стандарт плюс, модели: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02, в составе:	СЛО.03.00.Сп; СЛО.03.01.Сп; СЛО.03.02.Сп	
	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт плюс – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1).	СЛН.01.00 (мод.1).Сп; СЛН.01.01 (мод.1).Сп; СЛН.01.02 (мод.1).Сп; СЛН.02.00 (мод.1).Сп; СЛН.03.00 (мод.1).Сп; СЛН.03.01 (мод.1).Сп; СЛН.04.00 (мод.1).Сп; СЛН.05.00 (мод.1).Сп	
1.5	Стол лабораторный для весов, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.5.1	Стол лабораторный для весов, серия Стандарт плюс, модель: СЛВ.01.00, в составе:	СЛВ.01.00.Сп	
	- Стол лабораторный для весов – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛВ.00.00 ПС.02	

Продолжение таблицы 8

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.6	Стол лабораторный с мойкой, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.6.1	Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт плюс, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.Сп; СЛМ.01.01.Сп; СЛМ.02.00.Сп; СЛМ.02.01.Сп; СЛМ.02.02.Сп; СЛМ.02.03.Сп	
	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	
1.7	Стол-тумба лабораторный, вариант исполнения*:		
1.7.1	Стол-тумба лабораторный, серия Стандарт плюс, модели: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09, в составе:	СТ.01.00.Сп; СТ.01.01.Сп; СТ.01.02.Сп; СТ.01.03.Сп; СТ.01.04.Сп; СТ.01.05.Сп; СТ.01.06.Сп; СТ.01.07.Сп; СТ.01.08.Сп; СТ.02.00.Сп; СТ.02.01.Сп; СТ.02.02.Сп; СТ.02.03.Сп; СТ.02.04.Сп; СТ.02.05.Сп; СТ.02.06.Сп; СТ.02.07.Сп; СТ.02.08.Сп; СТ.02.09.Сп	1 (при необходимости)
	- Стол -тумба лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СТ.00.00 ПС.02	
1.8	Столик лабораторный подкатной *:		1 (при необходимости)
1.8.1	Столик лабораторный подкатной модели: СИЛ.01.00; СИЛ.01.01 – 1 шт., в составе:	СИЛ.01.00; СИЛ.01.01	
	- Столик лабораторный подкатной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СИЛ.00.00 ПС.02	
1.9	Тумба лабораторная стационарная, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.9.1	Тумба лабораторная стационарная, серия Стандарт плюс, модели: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00, в составе:	ТЛс.01.00.Сп; ТЛс.02.00.Сп; ТЛс.03.00.Сп; ТЛс.04.00.Сп; ТЛс.05.00.Сп; ТЛс.06.00.Сп; ТЛс.07.00.Сп; ТЛс.08.00.Сп; ТЛс.09.00.Сп	
	- Тумба лабораторная стационарная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ТЛс.00.00 ПС.02	
1.10	Шкаф лабораторный вытяжной, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.10.1	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Стандарт плюс, модели: ШВ.01.00; ШВ.01.01; ШВ.02.00; ШВ.02.01, в составе:	ШВ.01.00.Сп; ШВ.01.01.Сп; ШВ.02.00.Сп; ШВ.02.01.Сп	
	- Шкаф лабораторный вытяжной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШВ.00.00 ПС.02	
1.11	Шкаф лабораторный навесной, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.11.1	Шкаф лабораторный навесной, серия Стандарт плюс, модели: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02, в составе:	ШН.01.00.Сп; ШН.01.01.Сп; ШН.01.02.Сп; ШН.02.00.Сп; ШН.02.01.Сп; ШН.02.02.Сп	
	- Шкаф лабораторный навесной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШН.00.00 ПС.02	
1.12	Сушилка для лабораторной посуды		1 (при необходимости)
1.12.1	Сушилка для лабораторной посуды, модель: СП.01.00, в составе:	СП.01.00	
	- Сушилка для лабораторной посуды – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СП.00.00 ПС.02	
1.13	Руководство по эксплуатации	НКДЛ.00.00 РЭ.03	1

Примечание: *- исполнение и модель выбираются по требованию.

Таблица 9. Комплектность медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинко-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011», исполнения «Набор мебели медицинской для клинко-диагностических лабораторий «Оптима»

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Набор мебели медицинской для клинко-диагностических лабораторий «Оптима», в составе:	АСК.001.00011.О	1
1.1	Стол лабораторный, вариант исполнения*:		1
1.1.1	Стол лабораторный, серия Оптима, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе: - Стол лабораторный – 1 шт.	СЛ.00.00.О; СЛ.00.01.О; СЛ.01.00.О; СЛ.01.01.О; СЛ.01.02.О; СЛ.01.03.О; СЛ.04.00.О	
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Оптима – 1 шт., модели: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.О; СЛН.01.01.О; СЛН.01.02.О; СЛН.02.00.О; СЛН.03.00.О; СЛН.03.01.О; СЛН.04.00.О; СЛН.05.00.О	
1.1.2	Стол лабораторный, серия Оптима, модели: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе: - Стол лабораторный – 1 шт.	СЛ.02.00.О; СЛ.02.01.О; СЛ.02.02.О; СЛ.03.00.О; СЛ.03.01.О; СЛ.03.02.О; СЛ.03.03.О	
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Оптима – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1).О; СЛН.01.01 (мод.1).О; СЛН.01.02 (мод.1).О; СЛН.02.00 (мод.1).О; СЛН.03.00 (мод.1).О; СЛН.03.01 (мод.1).О; СЛН.04.00 (мод.1).О; СЛН.05.00 (мод.1).О	
1.2	Шкаф лабораторный, вариант исполнения*:		1
1.2.1	Шкаф лабораторный, серия Оптима, модели: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08, в составе: - Шкаф лабораторный – 1 шт.	ШЛ.01.00.О; ШЛ.01.01.О; ШЛ.01.02.О; ШЛ.01.03.О; ШЛ.01.04.О; ШЛ.01.05.О; ШЛ.01.06.О; ШЛ.01.07.О; ШЛ.01.08.О; ШЛ.02.00.О; ШЛ.02.01.О; ШЛ.02.02.О; ШЛ.02.03.О; ШЛ.02.04.О; ШЛ.02.05.О; ШЛ.02.06.О; ШЛ.02.07.О; ШЛ.02.08.О	
	- Паспорт – 1 шт.	ШЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Стол лабораторный островной, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.3.1	Стол лабораторный островной, серия Оптима, модели: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01, в составе: - Стол лабораторный островной – 1 шт.	СЛО.01.00.О; СЛО.01.01.О; СЛО.02.00.О; СЛО.02.01.О; СЛО.04.00.О; СЛО.04.01.О	
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	

Продолжение таблицы 9

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.3.2	Стол лабораторный островной, серия Оптима, модели: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02, в составе:	СЛО.03.00.О; СЛО.03.01.О; СЛО.03.02.О	
	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Оптима – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1).	СЛН.01.00 (мод.1).О; СЛН.01.01 (мод.1).О; СЛН.01.02 (мод.1).О; СЛН.02.00 (мод.1).О; СЛН.03.00 (мод.1).О; СЛН.03.01 (мод.1).О; СЛН.04.00 (мод.1).О; СЛН.05.00 (мод.1).О	
1.4	Стол лабораторный для весов, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.4.1	Стол лабораторный для весов, серия Оптима, модель: СЛВ.01.00, в составе:	СЛВ.01.00.О	
	- Стол лабораторный для весов – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛВ.00.00 ПС.02	
1.5	Стол лабораторный с мойкой, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.5.1	Стол лабораторный с мойкой, серия Оптима, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.О; СЛМ.01.01.О; СЛМ.02.00.О; СЛМ.02.01.О; СЛМ.02.02.О; СЛМ.02.03.О	
	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	
1.6	Стол-тумба лабораторный, вариант исполнения*:		
1.6.1	Стол-тумба лабораторный, серия Оптима, модели: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09, в составе:	СТ.01.00.О; СТ.01.01.О; СТ.01.02.О; СТ.01.03.О; СТ.01.04.О; СТ.01.05.О; СТ.01.06.О; СТ.01.07.О; СТ.01.08.О; СТ.02.00.О; СТ.02.01.О; СТ.02.02.О; СТ.02.03.О; СТ.02.04.О; СТ.02.05.О; СТ.02.06.О; СТ.02.07.О; СТ.02.08.О; СТ.02.09.О	1 (при необходимости)
	- Стол -тумба лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СТ.00.00 ПС.02	
1.7	Столик лабораторный подкатной *:		1 (при необходимости)
1.7.1	Столик лабораторный подкатной модели: СИЛ.01.00; СИЛ.01.01 – 1 шт., в составе:	СИЛ.01.00; СИЛ.01.01	
	- Столик лабораторный подкатной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СИЛ.00.00 ПС.02	
1.8	Тумба лабораторная стационарная, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.8.1	Тумба лабораторная стационарная, серия Оптима, модели: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00, в составе:	ТЛс.01.00.О; ТЛс.02.00.О; ТЛс.03.00.О; ТЛс.04.00.О; ТЛс.05.00.О; ТЛс.06.00.О; ТЛс.07.00.О; ТЛс.08.00.О; ТЛс.09.00.О	
	- Тумба лабораторная стационарная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ТЛс.00.00 ПС.02	

Продолжение таблицы 9

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.9	Тумба лабораторная подкатная, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.9.1	Тумба лабораторная подкатная, серия Оптима, модели: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00, в составе:	ТЛп.01.00.О; ТЛп.02.00.О; ТЛп.03.00.О; ТЛп.04.00.О; ТЛп.05.00.О; ТЛп.06.00.О; ТЛп.07.00.О; ТЛп.08.00.О; ТЛп.09.00.О	
	- Тумба лабораторная подкатная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ТЛп.00.00 ПС.02	
1.10	Шкаф лабораторный вытяжной, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.10.1	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Оптима, модели: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А, в составе:	ШВ.01.00А.О; ШВ.01.01А.О; ШВ.02.00А.О; ШВ.02.01А.О	
	- Шкаф лабораторный вытяжной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШВ.00.00 ПС.02	
1.11	Шкаф лабораторный навесной, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.11.1	Шкаф лабораторный навесной, серия Оптима, модели: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02, в составе:	ШН.01.00.О; ШН.01.01.О; ШН.01.02.О; ШНу.01.00.О; ШН.02.00.О; ШН.02.01.О; ШН.02.02.О	
	- Шкаф лабораторный навесной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШН.00.00 ПС.02	
1.12	Сушилка для лабораторной посуды		1 (при необходимости)
1.12.1	Сушилка для лабораторной посуды, модель: СП.01.00, в составе:	СП.01.00	
	- Сушилка для лабораторной посуды – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СП.00.00 ПС.02	
1.13	Руководство по эксплуатации	НКДЛ.00.00 РЭ.03	1

Примечание:

*- исполнение и модель выбираются по требованию.

Таблица 10. Комплектность медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клиничко-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011», исполнения «Набор мебели медицинской для клиничко-диагностических лабораторий «Элит»

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Набор мебели медицинской для клиничко-диагностических лабораторий «Элит», в составе:	АСК.001.00011.Э	1
1.1	Стол лабораторный, вариант исполнения*:		1
1.1.1	Стол лабораторный, серия Элит, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе:	СЛ.00.00.Э; СЛ.00.01.Э; СЛ.01.00.Э; СЛ.01.01.Э; СЛ.01.02.Э; СЛ.01.03.Э; СЛ.04.00.Э	
	- Стол лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
	Принадлежности: (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Элит – 1 шт., модели: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.Э; СЛН.01.01.Э; СЛН.01.02.Э; СЛН.02.00.Э; СЛН.03.00.Э; СЛН.03.01.Э; СЛН.04.00.Э; СЛН.05.00.Э	

Продолжение таблицы 10

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.1.2	Стол лабораторный, серия Элит, модели: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе:	СЛ.02.00.Э; СЛ.02.01.Э; СЛ.02.02.Э; СЛ.03.00.Э; СЛ.03.01.Э; СЛ.03.02.Э; СЛ.03.03.Э	
	- Стол лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Элит – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1).Э; СЛН.01.01 (мод.1).Э; СЛН.01.02 (мод.1).Э; СЛН.02.00 (мод.1).Э; СЛН.03.00 (мод.1).Э; СЛН.03.01 (мод.1).Э; СЛН.04.00 (мод.1).Э; СЛН.05.00 (мод.1).Э	
1.2	Шкаф лабораторный, вариантов исполнения*:		1
1.2.1	Шкаф лабораторный, серия Элит, модели: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08, в составе:	ШЛ.01.00.Э; ШЛ.01.01.Э; ШЛ.01.02.Э; ШЛ.01.03.Э; ШЛ.01.04.Э; ШЛ.01.05.Э; ШЛ.01.06.Э; ШЛ.01.07.Э; ШЛ.01.08.Э; ШЛ.02.00.Э; ШЛ.02.01.Э; ШЛ.02.02.Э; ШЛ.02.03.Э; ШЛ.02.04.Э; ШЛ.02.05.Э; ШЛ.02.06.Э; ШЛ.02.07.Э; ШЛ.02.08.Э	
	- Шкаф лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Стол лабораторный островной, вариант исполнения*:		1 (при необходи- мости)
1.3.1	Стол лабораторный островной, серия Элит, модели: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01, в составе:	СЛО.01.00.Э; СЛО.01.01.Э; СЛО.02.00.Э; СЛО.02.01.Э; СЛО.04.00.Э; СЛО.04.01.Э	
	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
1.3.2	Стол лабораторный островной, серия Элит, модели: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02, в составе:	СЛО.03.00.Э; СЛО.03.01.Э; СЛО.03.02.Э	
	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Элит – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1).	СЛН.01.00 (мод.1).Э; СЛН.01.01 (мод.1).Э; СЛН.01.02 (мод.1).Э; СЛН.02.00 (мод.1).Э; СЛН.03.00 (мод.1).Э; СЛН.03.01 (мод.1).Э; СЛН.04.00 (мод.1).Э; СЛН.05.00 (мод.1).Э	
1.4	Стол лабораторный для весов, вариант исполнения*:		1 (при необходи- мости)
1.4.1	Стол лабораторный для весов, серия Элит, модель: СЛВ.01.00, в составе:	СЛВ.01.00.Э	
	- Стол лабораторный для весов – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛВ.00.00 ПС.02	

Продолжение таблицы 10

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.5	Стол лабораторный с мойкой, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.5.1	Стол лабораторный с мойкой, серия Элит, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.Э; СЛМ.01.01.Э; СЛМ.02.00.Э; СЛМ.02.01.Э; СЛМ.02.02.Э; СЛМ.02.03.Э	
	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	
1.6	Стол-тумба лабораторный, вариант исполнения*:		
1.6.1	Стол-тумба лабораторный, серия Элит, модели: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09, в составе:	СТ.01.00.Э; СТ.01.01.Э; СТ.01.02.Э; СТ.01.03.Э; СТ.01.04.Э; СТ.01.05.Э; СТ.01.06.Э; СТ.01.07.Э; СТ.01.08.Э; СТ.02.00.Э; СТ.02.01.Э; СТ.02.02.Э; СТ.02.03.Э; СТ.02.04.Э; СТ.02.05.Э; СТ.02.06.Э; СТ.02.07.Э; СТ.02.08.Э; СТ.02.09.Э	1 (при необходимости)
	- Стол -тумба лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СТ.00.00 ПС.02	
1.7	Столик лабораторный подкатной *:		1 (при необходимости)
1.7.1	Столик лабораторный подкатной модели: СИЛ.01.00; СИЛ.01.01 – 1 шт., в составе:	СИЛ.01.00; СИЛ.01.01	
	- Столик лабораторный подкатной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СИЛ.00.00 ПС.02	
1.8	Тумба лабораторная стационарная, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.8.1	Тумба лабораторная стационарная, серия Элит, модели: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00, в составе:	ТЛс.01.00.Э; ТЛс.02.00.Э; ТЛс.03.00.Э; ТЛс.04.00.Э; ТЛс.05.00.Э; ТЛс.06.00.Э; ТЛс.07.00.Э; ТЛс.08.00.Э; ТЛс.09.00.Э	
	- Тумба лабораторная стационарная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ТЛс.00.00 ПС.02	
1.9	Тумба лабораторная подкатная, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.9.1	Тумба лабораторная подкатная, серия Элит, модели: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00, в составе:	ТЛп.01.00.Э; ТЛп.02.00.Э; ТЛп.03.00.Э; ТЛп.04.00.Э; ТЛп.05.00.Э; ТЛп.06.00.Э; ТЛп.07.00.Э; ТЛп.08.00.Э; ТЛп.09.00.Э	
	- Тумба лабораторная подкатная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ТЛп.00.00 ПС.02	
1.10	Шкаф лабораторный вытяжной, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.10.1	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Элит, модели: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А, в составе:	ШВ.01.00А.Э; ШВ.01.01А.Э; ШВ.02.00А.Э; ШВ.02.01А.Э	
	- Шкаф лабораторный вытяжной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШВ.00.00 ПС.02	

Продолжение таблицы 10

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.11	Шкаф лабораторный навесной, вариант исполнения*:		1 (при необходимости)
1.11.1	Шкаф лабораторный навесной, серия Элит, модели: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02, в составе:	ШН.01.00.Э; ШН.01.01.Э; ШН.01.02.Э; ШНу.01.00.Э; ШН.02.00.Э; ШН.02.01.Э; ШН.02.02.Э	
	- Шкаф лабораторный навесной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШН.00.00 ПС.02	
1.12	Сушилка для лабораторной посуды		1 (при необходимости)
1.12.1	Сушилка для лабораторной посуды, модель: СП.01.00, в составе:	СП.01.00	
	- Сушилка для лабораторной посуды – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СП.00.00 ПС.02	
1.13	Руководство по эксплуатации	НКДЛ.00.00 РЭ.03	1

Примечание:

*- исполнение и модель выбираются по требованию.

Таблица 11. Комплектность медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинко-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011», исполнения «Набор мебели медицинской для клинко-диагностических лабораторий «КДЛ»

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Набор мебели медицинской для клинко-диагностических лабораторий «КДЛ», в составе:	АСК.001.00011.КДЛ	1
1.1	Стол-тумба лабораторный варианты исполнения*:		1
1.1.1	Стол-тумба лабораторный, серия Стандарт, модели: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09, в составе:	СТ.01.00.С; СТ.01.01.С; СТ.01.02.С; СТ.01.03.С; СТ.01.04.С; СТ.01.05.С; СТ.01.06.С; СТ.01.07.С; СТ.01.08.С; СТ.02.00.С; СТ.02.01.С; СТ.02.02.С; СТ.02.03.С; СТ.02.04.С; СТ.02.05.С; СТ.02.06.С; СТ.02.07.С; СТ.02.08.С; СТ.02.09.С	
	- Стол -тумба лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СТ.00.00 ПС.02	
1.1.2	Стол-тумба лабораторный, серия Стандарт плюс, модели: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09, в составе:	СТ.01.00.Сп; СТ.01.01.Сп; СТ.01.02.Сп; СТ.01.03.Сп; СТ.01.04.Сп; СТ.01.05.Сп; СТ.01.06.Сп; СТ.01.07.Сп; СТ.01.08.Сп; СТ.02.00.Сп; СТ.02.01.Сп; СТ.02.02.Сп; СТ.02.03.Сп; СТ.02.04.Сп; СТ.02.05.Сп; СТ.02.06.Сп; СТ.02.07.Сп; СТ.02.08.Сп; СТ.02.09.Сп	
	- Стол -тумба лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СТ.00.00 ПС.02	

Продолжение таблицы 11

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.1.3	Стол-тумба лабораторный, серия Оптима, модели: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09, в составе:	СТ.01.00.О; СТ.01.01.О; СТ.01.02.О; СТ.01.03.О; СТ.01.04.О; СТ.01.05.О; СТ.01.06.О; СТ.01.07.О; СТ.01.08.О; СТ.02.00.О; СТ.02.01.О; СТ.02.02.О; СТ.02.03.О; СТ.02.04.О; СТ.02.05.О; СТ.02.06.О; СТ.02.07.О; СТ.02.08.О; СТ.02.09.О	
	- Стол -тумба лабораторный – 1 шт.	СТ.00.00 ПС.02	
	- Паспорт – 1 шт.	СТ.00.00 ПС.02	
1.1.4	Стол-тумба лабораторный, серия Элит, модели: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09, в составе:	СТ.01.00.Э; СТ.01.01.Э; СТ.01.02.Э; СТ.01.03.Э; СТ.01.04.Э; СТ.01.05.Э; СТ.01.06.Э; СТ.01.07.Э; СТ.01.08.Э; СТ.02.00.Э; СТ.02.01.Э; СТ.02.02.Э; СТ.02.03.Э; СТ.02.04.Э; СТ.02.05.Э; СТ.02.06.Э; СТ.02.07.Э; СТ.02.08.Э; СТ.02.09.Э	
	- Стол -тумба лабораторный – 1 шт.	СТ.00.00 ПС.02	
	- Паспорт – 1 шт.	СТ.00.00 ПС.02	
1.2	Шкаф лабораторный, варианты исполнения*:		1
1.2.1	Шкаф лабораторный, серия Стандарт, модели: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08, в составе:	ШЛ.01.00.С; ШЛ.01.01.С; ШЛ.01.02.С; ШЛ.01.03.С; ШЛ.01.04.С; ШЛ.01.05.С; ШЛ.01.06.С; ШЛ.01.07.С; ШЛ.01.08.С; ШЛ.02.00.С; ШЛ.02.01.С; ШЛ.02.02.С; ШЛ.02.03.С; ШЛ.02.04.С; ШЛ.02.05.С; ШЛ.02.06.С; ШЛ.02.07.С; ШЛ.02.08.С	
	- Шкаф лабораторный – 1 шт.	ШЛ.00.00 ПС.02	
	- Паспорт – 1 шт.	ШЛ.00.00 ПС.02	
1.2.2	Шкаф лабораторный, серия Стандарт плюс, модели: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08, в составе:	ШЛ.01.00.Сп; ШЛ.01.01.Сп; ШЛ.01.02.Сп; ШЛ.01.03.Сп; ШЛ.01.04.Сп; ШЛ.01.05.Сп; ШЛ.01.06.Сп; ШЛ.01.07.Сп; ШЛ.01.08.Сп; ШЛ.02.00.Сп; ШЛ.02.01.Сп; ШЛ.02.02.Сп; ШЛ.02.03.Сп; ШЛ.02.04.Сп; ШЛ.02.05.Сп; ШЛ.02.06.Сп; ШЛ.02.07.Сп; ШЛ.02.08.Сп	
	- Шкаф лабораторный – 1 шт.	ШЛ.00.00 ПС.02	
	- Паспорт – 1 шт.	ШЛ.00.00 ПС.02	
1.2.3	Шкаф лабораторный, серия Оптима, модели: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08, в составе:	ШЛ.01.00.О; ШЛ.01.01.О; ШЛ.01.02.О; ШЛ.01.03.О; ШЛ.01.04.О; ШЛ.01.05.О; ШЛ.01.06.О; ШЛ.01.07.О; ШЛ.01.08.О; ШЛ.02.00.О; ШЛ.02.01.О; ШЛ.02.02.О; ШЛ.02.03.О; ШЛ.02.04.О; ШЛ.02.05.О; ШЛ.02.06.О; ШЛ.02.07.О; ШЛ.02.08.О	
	- Шкаф лабораторный – 1 шт.	ШЛ.00.00 ПС.02	
	- Паспорт – 1 шт.	ШЛ.00.00 ПС.02	

Продолжение таблицы 11

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.2.4	Шкаф лабораторный, серия Элит, модели: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08, в составе:	ШЛ.01.00.Э; ШЛ.01.01.Э; ШЛ.01.02.Э; ШЛ.01.03.Э; ШЛ.01.04.Э; ШЛ.01.05.Э; ШЛ.01.06.Э; ШЛ.01.07.Э; ШЛ.01.08.Э; ШЛ.02.00.Э; ШЛ.02.01.Э; ШЛ.02.02.Э; ШЛ.02.03.Э; ШЛ.02.04.Э; ШЛ.02.05.Э; ШЛ.02.06.Э; ШЛ.02.07.Э; ШЛ.02.08.Э	
	- Шкаф лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Стол лабораторный, варианты исполнения*:		1 (при необходи- мости)
1.3.1	Стол лабораторный, серия Стандарт, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе:	СЛ.00.00.С; СЛ.00.01.С; СЛ.01.00.С; СЛ.01.01.С; СЛ.01.02.С; СЛ.01.03.С; СЛ.04.00.С	
	- Стол лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт – 1 шт., модели: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.С; СЛН.01.01.С; СЛН.01.02.С; СЛН.02.00.С; СЛН.03.00.С; СЛН.03.01.С; СЛН.04.00.С; СЛН.05.00.С	
1.3.2	Стол лабораторный, серия Стандарт, модели: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе:	СЛ.02.00.С; СЛ.02.01.С; СЛ.02.02.С; СЛ.03.00.С; СЛ.03.01.С; СЛ.03.02.С; СЛ.03.03.С	
	- Стол лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1.); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1).С; СЛН.01.01 (мод.1).С; СЛН.01.02 (мод.1).С; СЛН.02.00 (мод.1).С; СЛН.03.00 (мод.1).С; СЛН.03.01 (мод.1).С; СЛН.04.00 (мод.1).С; СЛН.05.00 (мод.1).С	
1.3.3	Стол лабораторный, серия Стандарт плюс, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе:	СЛ.00.00.Сп; СЛ.00.01.Сп; СЛ.01.00.Сп; СЛ.01.01.Сп; СЛ.01.02.Сп; СЛ.01.03.Сп; СЛ.04.00.Сп	
	- Стол лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт плюс – 1 шт., модели: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.Сп; СЛН.01.01.Сп; СЛН.01.02.Сп; СЛН.02.00.Сп; СЛН.03.00.Сп; СЛН.03.01.Сп; СЛН.04.00.Сп; СЛН.05.00.Сп	
1.3.4	Стол лабораторный, серия Стандарт плюс, модели: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе:	СЛ.02.00.Сп; СЛ.02.01.Сп; СЛ.02.02.Сп; СЛ.03.00.Сп; СЛ.03.01.Сп; СЛ.03.02.Сп; СЛ.03.03.Сп	
	- Стол лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	

Продолжение таблицы 11

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт плюс – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1).Сп; СЛН.01.01 (мод.1).Сп; СЛН.01.02 (мод.1).Сп; СЛН.02.00 (мод.1).Сп; СЛН.03.00 (мод.1).Сп; СЛН.03.01 (мод.1).Сп; СЛН.04.00 (мод.1).Сп; СЛН.05.00 (мод.1).Сп	
1.3.5	Стол лабораторный, серия Оптима, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе:	СЛ.00.00.О; СЛ.00.01.О; СЛ.01.00.О; СЛ.01.01.О; СЛ.01.02.О; СЛ.01.03.О; СЛ.04.00.О	
	- Стол лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
	Принадлежности: (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Оптима – 1 шт., модели: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.О; СЛН.01.01.О; СЛН.01.02.О; СЛН.02.00.О; СЛН.03.00.О; СЛН.03.01.О; СЛН.04.00.О; СЛН.05.00.О	
1.3.6	Стол лабораторный, серия Оптима, модели: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе:	СЛ.02.00.О; СЛ.02.01.О; СЛ.02.02.О; СЛ.03.00.О; СЛ.03.01.О; СЛ.03.02.О; СЛ.03.03.О	
	- Стол лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Оптима – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1).О; СЛН.01.01 (мод.1).О; СЛН.01.02 (мод.1).О; СЛН.02.00 (мод.1).О; СЛН.03.00 (мод.1).О; СЛН.03.01 (мод.1).О; СЛН.04.00 (мод.1).О; СЛН.05.00 (мод.1).О	
1.3.7	Стол лабораторный, серия Элит, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе:	СЛ.00.00.Э; СЛ.00.01.Э; СЛ.01.00.Э; СЛ.01.01.Э; СЛ.01.02.Э; СЛ.01.03.Э; СЛ.04.00.Э	
	- Стол лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
	Принадлежности: (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Элит – 1 шт., модели: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.Э; СЛН.01.01.Э; СЛН.01.02.Э; СЛН.02.00.Э; СЛН.03.00.Э; СЛН.03.01.Э; СЛН.04.00.Э; СЛН.05.00.Э	
1.3.8	Стол лабораторный, серия Элит, модели: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе:	СЛ.02.00.Э; СЛ.02.01.Э; СЛ.02.02.Э; СЛ.03.00.Э; СЛ.03.01.Э; СЛ.03.02.Э; СЛ.03.03.Э	
	- Стол лабораторный – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Элит – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1).Э; СЛН.01.01 (мод.1).Э; СЛН.01.02 (мод.1).Э; СЛН.02.00 (мод.1).Э; СЛН.03.00 (мод.1).Э; СЛН.03.01 (мод.1).Э; СЛН.04.00 (мод.1).Э; СЛН.05.00 (мод.1).Э	

Продолжение таблицы 11

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.4	Стол лабораторный островной, варианты исполнения*:		1 (при необходимости)
1.4.1	Стол лабораторный островной, серия Стандарт, модели: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01, в составе:	СЛО.01.00.С; СЛО.01.01.С; СЛО.02.00.С; СЛО.02.01.С; СЛО.04.00.С; СЛО.04.01.С	
	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
1.4.2	Стол лабораторный островной, серия Стандарт, модели: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02, в составе:	СЛО.03.00.С; СЛО.03.01.С; СЛО.03.02.С	
	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1).	СЛН.01.00 (мод.1).С; СЛН.01.01 (мод.1).С; СЛН.01.02 (мод.1).С; СЛН.02.00 (мод.1).С; СЛН.03.00 (мод.1).С; СЛН.03.01 (мод.1).С; СЛН.04.00 (мод.1).С; СЛН.05.00 (мод.1).С	
1.4.3	Стол лабораторный островной, серия Стандарт плюс, модели: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01, в составе:	СЛО.01.00.Сп; СЛО.01.01.Сп; СЛО.02.00.Сп; СЛО.02.01.Сп; СЛО.04.00.Сп; СЛО.04.01.Сп	
	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
1.4.4	Стол лабораторный островной, серия Стандарт плюс, модели: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02, в составе:	СЛО.03.00.Сп; СЛО.03.01.Сп; СЛО.03.02.Сп	
	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт плюс – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1).	СЛН.01.00 (мод.1).Сп; СЛН.01.01 (мод.1).Сп; СЛН.01.02 (мод.1).Сп; СЛН.02.00 (мод.1).Сп; СЛН.03.00 (мод.1).Сп; СЛН.03.01 (мод.1).Сп; СЛН.04.00 (мод.1).Сп; СЛН.05.00 (мод.1).Сп	
1.4.5	Стол лабораторный островной, серия Оптима, модели: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01, в составе:	СЛО.01.00.О; СЛО.01.01.О; СЛО.02.00.О; СЛО.02.01.О; СЛО.04.00.О; СЛО.04.01.О	
	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
	Стол лабораторный островной, серия Оптима, модели: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02, в составе:	СЛО.03.00.О; СЛО.03.01.О; СЛО.03.02.О	
	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	

Продолжение таблицы 11

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Оптима – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1.); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1).	СЛН.01.00 (мод.1).О; СЛН.01.01 (мод.1).О; СЛН.01.02 (мод.1).О; СЛН.02.00 (мод.1).О; СЛН.03.00 (мод.1).О; СЛН.03.01 (мод.1).О; СЛН.04.00 (мод.1).О; СЛН.05.00 (мод.1).О	
1.4.6	Стол лабораторный островной, серия Элит, модели: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01, в составе:	СЛО.01.00.Э; СЛО.01.01.Э; СЛО.02.00.Э; СЛО.02.01.Э; СЛО.04.00.Э; СЛО.04.01.Э	
	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
1.4.7	Стол лабораторный островной, серия Элит, модели: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02, в составе:	СЛО.03.00.Э; СЛО.03.01.Э; СЛО.03.02.Э	
	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Элит – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1.); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1).	СЛН.01.00 (мод.1).Э; СЛН.01.01 (мод.1).Э; СЛН.01.02 (мод.1).Э; СЛН.02.00 (мод.1).Э; СЛН.03.00 (мод.1).Э; СЛН.03.01 (мод.1).Э; СЛН.04.00 (мод.1).Э; СЛН.05.00 (мод.1).Э	
1.5	Стол лабораторный для весов, вариант исполнения*:		1 (при необходи- мости)
1.5.1	Стол лабораторный для весов, серия Стандарт, модель: СЛВ.01.00, в составе:	СЛВ.01.00.С	
	- Стол лабораторный для весов – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛВ.00.00 ПС.02	
1.5.2	Стол лабораторный для весов, серия Стандарт плюс, модель: СЛВ.01.00, в составе:	СЛВ.01.00.Сп	
	- Стол лабораторный для весов – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛВ.00.00 ПС.02	
1.5.3	Стол лабораторный для весов, серия Оптима, модель: СЛВ.01.00, в составе:	СЛВ.01.00.О	
	- Стол лабораторный для весов – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛВ.00.00 ПС.02	
1.5.4	Стол лабораторный для весов, серия Элит, модель: СЛВ.01.00, в составе:	СЛВ.01.00.Э	
	- Стол лабораторный для весов – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛВ.00.00 ПС.02	
1.6	Стол лабораторный с мойкой, вариант исполнения*:		1 (при необходи- мости)
1.6.1	Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.С; СЛМ.01.01.С; СЛМ.02.00.С; СЛМ.02.01.С; СЛМ.02.02.С; СЛМ.02.03.С	
	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	

Продолжение таблицы 11

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.6.2	Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт плюс, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.Сп; СЛМ.01.01.Сп; СЛМ.02.00.Сп; СЛМ.02.01.Сп; СЛМ.02.02.Сп; СЛМ.02.03.Сп	
	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	
1.6.3	Стол лабораторный с мойкой, серия Оптима, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.О; СЛМ.01.01.О; СЛМ.02.00.О; СЛМ.02.01.О; СЛМ.02.02.О; СЛМ.02.03.О	
	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	
1.6.4	Стол лабораторный с мойкой, серия Элит, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.Э; СЛМ.01.01.Э; СЛМ.02.00.Э; СЛМ.02.01.Э; СЛМ.02.02.Э; СЛМ.02.03.Э	
	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	
1.7	Столик лабораторный подкатной *:		1 (при необходимости)
1.7.1	Столик лабораторный подкатной модели: СИЛ.01.00; СИЛ.01.01 – 1 шт., в составе:	СИЛ.01.00; СИЛ.01.01	
	- Столик лабораторный подкатной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СИЛ.00.00 ПС.02	
1.8	Тумба лабораторная стационарная, варианты исполнения*:		1 (при необходимости)
1.8.1	Тумба лабораторная стационарная, серия Стандарт, модели: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00, в составе:	ТЛс.01.00.С; ТЛс.02.00.С; ТЛс.03.00.С; ТЛс.04.00.С; ТЛс.05.00.С; ТЛс.06.00.С; ТЛс.07.00.С; ТЛс.08.00.С; ТЛс.09.00.С	
	- Тумба лабораторная стационарная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ТЛс.00.00 ПС.02	
1.9	Тумба лабораторная стационарная, серия Стандарт плюс, модели: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00, в составе:	ТЛс.01.00.Сп; ТЛс.02.00.Сп; ТЛс.03.00.Сп; ТЛс.04.00.Сп; ТЛс.05.00.Сп; ТЛс.06.00.Сп; ТЛс.07.00.Сп; ТЛс.08.00.Сп; ТЛс.09.00.Сп	
	- Тумба лабораторная стационарная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ТЛс.00.00 ПС.02	
1.10	Тумба лабораторная стационарная, серия Оптима, модели: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00, в составе:	ТЛс.01.00.О; ТЛс.02.00.О; ТЛс.03.00.О; ТЛс.04.00.О; ТЛс.05.00.О; ТЛс.06.00.О; ТЛс.07.00.О; ТЛс.08.00.О; ТЛс.09.00.О	
	- Тумба лабораторная стационарная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ТЛс.00.00 ПС.02	
1.11	Тумба лабораторная стационарная, серия Элит, модели: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00, в составе:	ТЛс.01.00.Э; ТЛс.02.00.Э; ТЛс.03.00.Э; ТЛс.04.00.Э; ТЛс.05.00.Э; ТЛс.06.00.Э; ТЛс.07.00.Э; ТЛс.08.00.Э; ТЛс.09.00.Э	
	- Тумба лабораторная стационарная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ТЛс.00.00 ПС.02	

Продолжение таблицы 11

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.12	Тумба лабораторная подкатная, варианты исполнения*:		1 (при необходимости)
1.12.1	Тумба лабораторная подкатная, серия Стандарт, модели: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00, в составе:	ТЛп.01.00.С; ТЛп.02.00.С; ТЛп.03.00.С; ТЛп.04.00.С; ТЛп.05.00.С; ТЛп.06.00.С; ТЛп.07.00.С; ТЛп.08.00.С; ТЛп.09.00.С	
	- Тумба лабораторная подкатная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ТЛп.00.00 ПС.02	
1.12.2	Тумба лабораторная подкатная, серия Стандарт плюс, модели: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00, в составе:	ТЛп.01.00.Сп; ТЛп.02.00.Сп; ТЛп.03.00.Сп; ТЛп.04.00.Сп; ТЛп.05.00.Сп; ТЛп.06.00.Сп; ТЛп.07.00.Сп; ТЛп.08.00.Сп; ТЛп.09.00.Сп	
	- Тумба лабораторная подкатная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ТЛп.00.00 ПС.02	
1.12.3	Тумба лабораторная подкатная, серия Оптима, модели: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00, в составе:	ТЛп.01.00.О; ТЛп.02.00.О; ТЛп.03.00.О; ТЛп.04.00.О; ТЛп.05.00.О; ТЛп.06.00.О; ТЛп.07.00.О; ТЛп.08.00.О; ТЛп.09.00.О	
	- Тумба лабораторная подкатная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ТЛп.00.00 ПС.02	
1.12.4	Тумба лабораторная подкатная, серия Элит, модели: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00, в составе:	ТЛп.01.00.Э; ТЛп.02.00.Э; ТЛп.03.00.Э; ТЛп.04.00.Э; ТЛп.05.00.Э; ТЛп.06.00.Э; ТЛп.07.00.Э; ТЛп.08.00.Э; ТЛп.09.00.Э	
	- Тумба лабораторная подкатная – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ТЛп.00.00 ПС.02	
1.13	Шкаф лабораторный вытяжной, вариантов исполнения*:		1 (при необходимости)
1.13.1	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Стандарт плюс, модели: ШВ.01.00; ШВ.01.01; ШВ.02.00; ШВ.02.01, в составе:	ШВ.01.00.Сп; ШВ.01.01.Сп; ШВ.02.00.Сп; ШВ.02.01.Сп	
	- Шкаф лабораторный вытяжной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШВ.00.00 ПС.02	
1.13.2	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Оптима, модели: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А, в составе:	ШВ.01.00А.О; ШВ.01.01А.О; ШВ.02.00А.О; ШВ.02.01А.О	
	- Шкаф лабораторный вытяжной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШВ.00.00 ПС.02	
1.13.3	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Элит, модели: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А, в составе:	ШВ.01.00А.Э; ШВ.01.01А.Э; ШВ.02.00А.Э; ШВ.02.01А.Э	
	- Шкаф лабораторный вытяжной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШВ.00.00 ПС.02	

Продолжение таблицы 11

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.14	Шкаф лабораторный навесной, варианты исполнения*:		1 (при необходимости)
1.14.1	Шкаф лабораторный навесной, серия Стандарт, модели: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02, в составе:	ШН.01.00.С; ШН.01.01.С; ШН.01.02.С; ШНу.01.00.С; ШН.02.00.С; ШН.02.01.С; ШН.02.02.С	
	- Шкаф лабораторный навесной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШН.00.00 ПС.02	
1.14.2	Шкаф лабораторный навесной, серия Стандарт плюс, модели: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02, в составе:	ШН.01.00.Сп; ШН.01.01.Сп; ШН.01.02.Сп; ШНу.01.00.Сп; ШН.02.00.Сп; ШН.02.01.Сп; ШН.02.02.Сп	
	- Шкаф лабораторный навесной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШН.00.00 ПС.02	
1.14.3	Шкаф лабораторный навесной, серия Оптима, модели: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02, в составе:	ШН.01.00.О; ШН.01.01.О; ШН.01.02.О; ШНу.01.00.О; ШН.02.00.О; ШН.02.01.О; ШН.02.02.О	
	- Шкаф лабораторный навесной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШН.00.00 ПС.02	
1.14.4	Шкаф лабораторный навесной, серия Элит, модели: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02, в составе:	ШН.01.00.Э; ШН.01.01.Э; ШН.01.02.Э; ШНу.01.00.Э; ШН.02.00.Э; ШН.02.01.Э; ШН.02.02.Э	
	- Шкаф лабораторный навесной – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	ШН.00.00 ПС.02	
1.15	Сушилка для лабораторной посуды		1 (при необходимости)
1.15.1	Сушилка для лабораторной посуды, модель: СП.01.00 в составе:	СП.01.00	
	- Сушилка для лабораторной посуды – 1 шт.		
	- Паспорт – 1 шт.	СП.00.00 ПС.02	
1.16	Руководство по эксплуатации	НКДЛ.00.00 РЭ.03	1

Примечание:

*- исполнение и модель выбираются по требованию.

5 Устройство изделия

Набор мебели представлен следующими исполнениями:

- Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт» (далее-набор «Стандарт»);
- Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс» (далее-набор «Стандарт плюс»);
- Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий « Оптима» (далее-набор « Оптима»);
- Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит» (далее-набор «Элит»);
- Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ» (далее-набор «КДЛ»).

В состав наборов мебели входят различные изделия (см. Раздел 4), позволяющие создавать специализированные функциональные комбинации.

Мебель, входящая в состав наборов мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий, изготавливается в сериях: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима и Элит и различных моделей. Изготовление в сериях Стандарт, Стандарт плюс, Оптима и Элит не распространяется на Столики лабораторные подкатные и Сушилку для лабораторной посуды (см. п.7, п.13 Таблицы 1).

Изделия набора, изготовленные в различных сериях, отличаются дизайном внешнего вида, а также применяемыми материалами. Изделия, изготовленные в одной серии, имеют единый дизайн, выполнены в одном стиле.

Общий вид изделий набора приведен в паспортах на изделия набора.

Наборы «Стандарт», «Стандарт плюс», «Оптим», «Элит» и «КДЛ» отличаются исполнениями изделий, входящих в состав, и комплектностью. Набор в исполнении «КДЛ» может включать в себя изделия, изготовленные в разных сериях.

5.1 Столы лабораторные

Конструкция столов состоит из каркаса, выполненного из алюминиевого или стального профиля и поверхностей из листового материала. В зависимости от исполнения столы изготавливаются с вкладной столешницей, окантованной профилем по периметру, или накладной, без окантовки.

Стол устанавливается на неподвижные опоры, регулируемые по высоте для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию.

В зависимости от модели стола конструкция изделия может включать в себя тумбы с внутренними полками и распашными дверками, тумбы с выдвижными ящиками.

Согласно таблице комплектности столы лабораторные могут комплектоваться принадлежностью: надстройкой для стола.

Конструкция надстроек состоит из каркаса, выполненного из алюминиевого или стального профиля, и поверхностей из листового материала.

Надстройки устанавливаются на столешницу стола.

В зависимости от исполнения надстройки конструкция изделия может включать в себя закрытые полки и распашными дверками, открытые ниши, штативы для бюреток, электрический короб для электропитания подключаемых приборов.

Изделия серий Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит отличаются между собой дизайном внешнего вида, а также материалами изготовления.

5.2 Столы лабораторные островные

Конструкция столов лабораторных островных состоит из каркаса, выполненного из алюминиевого или стального профиля, и поверхностей из листового материала. В зависимости от исполнения столы изготавливаются с вкладной столешницей, окантованной профилем по периметру, или накладной, без окантовки.

Стол устанавливается на неподвижные опоры, регулируемые по высоте для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию.

Конструкция столов лабораторных островных моделей СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01 включают в себя двухъярусную надстройку. В зависимости от модели стола конструкция изделия может включать в себя двухъярусную надстройку, тумбы с внутренними полками и распашными дверками, тумбы с выдвижными ящиками, мойку в комплекте со смесителем, сифоном и гофрированным сливом, электророзетки и выключатель.

Согласно таблице комплектности столы лабораторные островные моделей СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02 могут комплектоваться принадлежностью: надстройкой для стола.

Конструкция надстроек состоит из каркаса, выполненного из алюминиевого или стального профиля, и поверхностей из листового материала.

Надстройки устанавливаются на столешницу стола.

В зависимости от исполнения надстройки конструкция изделия может включать в себя закрытые полки и распашными дверками, открытые ниши, штативы для бюреток, электрический короб для электропитания подключаемых приборов.

Изделия серий Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит отличаются между собой дизайном внешнего вида, а также материалами изготовления.

5.3 Столы лабораторные для весов

Конструкция Столов лабораторных для весов СЛВ.01.00 представляет собой комбинацию двух столов:

- стола для весов, изготовленного из металлического каркаса и столешницы из искусственного гранита;

- стола рабочего, изготовленного из алюминиевого или стального каркаса и поверхностей из листовых материалов.

Столешница стола для весов врезана в столешницу стола рабочего и установлена на металлокаркас. Конструкция изделия включает в себя один выдвижной ящик.

Стол может быть либо с вкладной столешницей, окантованной профилем по периметру, либо накладной без окантовки.

Столы устанавливаются на неподвижные опоры, регулируемые по высоте для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию.

Изделия серий Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит отличаются между собой дизайном внешнего вида, а также материалами изготовления.

5.4 Столы лабораторные с мойкой

Конструкция столов лабораторных с мойкой состоит из каркаса, выполненного из алюминиевого или стального профиля и поверхностей из листового материала. Столы могут быть изготовлены либо с вкладной столешницей, окантованной профилем по периметру, либо накладной без окантовки. В столешницу врезана мойка. Мойка оснащается смесителем, сифоном и гофрированным сливом. В зависимости от модели стола конструкция изделия может включать в себя тумбы с внутренними полками и распашными дверками, тумбы с ящиками.

Столы устанавливаются на неподвижные опоры, регулируемые по высоте для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию.

Изделия серий Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит отличаются между собой дизайном внешнего вида, а также материалами изготовления.

5.5 Столы-тумбы лабораторные

Конструкция стола-тумбы состоит из каркаса, выполненного из алюминиевого или стального профиля и поверхностей из листового материала. В зависимости от исполнения столы-тумбы изготавливаются с вкладной столешницей, окантованной профилем по периметру, или накладной, без окантовки.

Столы-тумбы устанавливаются на неподвижные опоры, регулируемые по высоте для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию.

В зависимости от модели конструкция изделия может включать в себя открытые ниши, тумбы с внутренними полками и распашными дверками, тумбы с ящиками.

Изделия серий Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит отличаются между собой дизайном внешнего вида, а также материалами изготовления.

5.6 Столик лабораторный подкатной

Конструкция столика состоит из каркаса, выполненного из алюминиевого профиля и поверхностей из листового материала. В зависимости от исполнения столики включают в себя открытые ниши или выдвижной ящик и открытую нишу.

Столики устанавливаются на колесные опоры.

5.7 Тумба лабораторная стационарная

Конструкция тумбы состоит из каркаса, выполненного из алюминиевого или стального профиля и поверхностей из листового материала. Тумбы могут быть либо с вкладной столешницей, окантованной профилем по периметру, либо накладной без окантовки.

Тумбы устанавливаются на неподвижные опоры, регулируемые по высоте для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию.

В зависимости от исполнения тумбы включают в себя в различных сочетаниях следующие элементы: открытые ниши, отделения с полкой, закрытые дверкой, выдвижные ящики, а также выдвижную столешницу.

Изделия серий Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит отличаются между собой дизайном внешнего вида, а также материалами изготовления.

5.8 Тумба лабораторная подкатная

Конструкция тумбы состоит из каркаса, выполненного из алюминиевого или стального профиля и поверхностей из листового материала. Тумбы могут быть либо с вкладной столешницей, окантованной профилем по периметру, либо накладной без окантовки.

Тумбы устанавливаются на колесные опоры

В зависимости от исполнения тумбы включают в себя в различных сочетаниях следующие элементы: открытые ниши, отделения с полкой, закрытые дверкой, выдвижные ящики, а также выдвижную столешницу.

Изделия серий Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит отличаются между собой дизайном внешнего вида, а также материалами изготовления.

5.9 Шкафы лабораторные вытяжные

Шкафы лабораторные вытяжные представляют собой закрытую камеру с прозрачным защитным экраном, внутри которой расположена рабочая зона (столешница) и вытяжная вентиляция.

Шкафы лабораторные вытяжные серий Стандарт плюс, Оптима, Элит отличаются между собой дизайном внешнего вида, а также материалами изготовления.

Конструкция корпуса (камеры) шкафов лабораторных вытяжных серий Оптима и Элит представляет собой каркас, выполненный из алюминиевого или стального профиля, и поверхности из листовых материалов. Корпус шкафов лабораторных вытяжных серии Стандарт плюс изготавливается из листовых материалов, без применения алюминиевых или стальных профилей.

В верхней части корпуса шкафа установлено вытяжное устройство, представляющее собой вентилятор с воздуховодом, подключаемым к централизованной вентиляционной системе.

Рабочая зона шкафа лабораторного вытяжного представляет собой устойчивую к воздействию агрессивных соединений столешницу.

Рабочая зона шкафа закрывается вертикально подвижным экраном из ударопрочного стекла в алюминиевой раме.

Шкафы устанавливаются на неподвижные опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Неподвижные опоры шкафов лабораторных моделей ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А являются регулируемыми с диапазоном регулирования не менее 10 мм.

Шкафы лабораторные вытяжные снабжены светодиодным светильником типа PLED-T5i PL, номинальной потребляемой мощностью 8-10 Вт, электропитание: 220 В, 50 Гц, а также розетками с заземляющим контактом и защитной крышкой для подключения электропитания от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц.

В зависимости от модели шкафа лабораторного вытяжного конструкция изделия может включать в себя мойку из нержавеющей стали, искусственного камня или пропилена, полки с распашными дверцами.

5.10 Шкафы лабораторные

Конструкция шкафов состоит из каркаса, выполненного из алюминиевого или стального профиля и поверхностей из листового материала.

Шкафы устанавливаются на неподвижные опоры, регулируемые по высоте для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения изделию.

В зависимости от модели шкафа конструкция изделия может включать в себя открытые полки, полки с распашными дверками, полки с распашными стеклянными дверками, выдвижные ящики.

Изделия серий Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит отличаются между собой дизайном внешнего вида, а также материалами изготовления.

5.11 Шкафы лабораторные

Конструкция шкафов состоит из каркаса, выполненного из алюминиевого или стального профиля и поверхностей из листового материала.

Шкафы крепятся на стену.

В зависимости от исполнения шкафа конструкция изделия может включать в себя открытые полки, полки с распашными дверками, полки с распашными стеклянными дверками.

Изделия серий Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит отличаются между собой дизайном внешнего вида, а также материалами изготовления.

5.12 Сушилка для лабораторной посуды

Сушилка представляет собой панель с приваренными держателями. Для сбора воды предусмотрен съемный поддон. Вся конструкция выполнена из нержавеющей стали.

6 Монтаж, подготовка к работе

6.1 Изделие может поставляться в собранном или разобранном виде по требованию. В случае поставки изделия в разобранном виде к паспорту на изделие набора отдельно прилагается схема сборки.

6.2 К сборке изделия набора допускаются лица, внимательно изучившие эксплуатационную документацию, описание и конструкцию изделия.

6.3 После транспортирования или хранения в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 3 часов.

6.4 Распакуйте компоненты изделия, освободив его от упаковочного материала.

6.5 Проверьте целостность деталей изделия методом визуального осмотра.

6.6 Следуйте указаниям, соответствующие требуемому изделию:

6.7.1 Стол лабораторный:

-Аккуратно положите изделие на заднюю стенку. С помощью молотка установите заглушки в ножки и вверните в них регулируемые опоры. Отрегулируйте опоры для придания изделию устойчивого состояния. Раскачивания и перекосы не допускаются.

-Для модели СЛ.04.00 установите тумбу на колесные опоры при помощи крестовой отвертки и саморезов.

-С помощью крестовой отвертки установите ручки на лицевой стороне фасада.

-При наличии в комплектности принадлежности см. п.6.7.3.

6.7.2 Стол лабораторный островной:

-Аккуратно положите изделие на заднюю стенку. С помощью молотка установите заглушки в ножки и вверните в них регулируемые опоры. Отрегулируйте опоры для придания изделию устойчивого состояния. Раскачивания и перекосы не допускаются.

-С помощью крестовой отвертки установите ручку на лицевую сторону фасада.

-При наличии в комплектности принадлежности см. п.6.7.3.

-Установите смеситель и сифон на мойку (для моделей СЛО.04.00, СЛО.04.01). Подсоедините смеситель к трубам водоснабжения, соблюдая маркировки на рычаге смесителя (удлинительные шланги в комплект не входят). Подсоедините сифон к трубе водоотведения (удлинительная труба в комплект не входит).

-Подключите электрический короб к электросети (для моделей СЛО.01.00, СЛО.01.01, СЛО.02.00, СЛО.02.01).

6.7.3 Принадлежность: Надстройка для стола:

-Установите надстройку на столешницу стола, закрепите болтом М8х40(30) через отверстие в столешнице в профиль надстройки с помощью двух ключей гаечных №13.

-С помощью крестовой отвертки установите ручки на лицевую сторону фасада (для моделей СЛН.03.00, СЛН.03.00 (мод.1), СЛН.03.01, СЛН.03.01 (мод.1), СЛН.04.00, СЛН.04.00 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1)).

-Подключите электрический короб к электросети (для моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1)).

6.7.4 Стол лабораторный для весов:

-Аккуратно положите стол на заднюю стенку. С помощью молотка установите заглушки в ножки и вверните в них регулируемые опоры. Отрегулируйте опоры для придания изделию устойчивого состояния. Раскачивания и перекосы не допускаются.

-С помощью крестовой отвертки установите ручку на лицевую сторону фасада.

-Установите стол для весов. На него сверху поставьте стол рабочий, совместив столешницу стола для весов с отверстием в столе рабочем.

6.7.5 Стол лабораторный с мойкой:

-Аккуратно положите изделие на заднюю стенку. С помощью молотка установите заглушки в ножки и вверните в них регулируемые опоры. Отрегулируйте опоры для придания изделию устойчивого состояния. Раскачивания и перекосы не допускаются.

-С помощью крестовой отвертки установите ручку на лицевую сторону фасада.

-Установите смеситель и сифон на раковину. Подсоедините смеситель к трубам водоснабжения, соблюдая маркировки на рычаге смесителя (удлинительные шланги в комплект не входят). Подсоедините сифон к трубе водоотведения (удлинительная труба в комплект не входит).

6.7.6 Стол-тумба лабораторный:

-Аккуратно положите изделие на заднюю стенку. С помощью молотка установите заглушки в ножки и вверните в них регулируемые опоры. Отрегулируйте опоры для придания изделию устойчивого состояния. Раскачивания и перекосы не допускаются.

-С помощью крестовой отвертки установите ручки на лицевую сторону фасада.

6.7.7 Столик лабораторный подкатной:

-Аккуратно положите изделие на заднюю стенку. Вкрутите колесные опоры в ножки столика.

-С помощью крестовой отвертки установите ручки на лицевую сторону фасада (для модели СИЛ.01.01).

6.7.8 Тумба лабораторная стационарная:

Аккуратно положите изделие на заднюю стенку. С помощью молотка установите заглушки в ножки и вверните в них регулируемые опоры. Отрегулируйте опоры для придания изделию устойчивого состояния. Раскачивания и перекосы не допускаются.

С помощью крестовой отвертки установите ручки на лицевую сторону фасада.

6.7.9 Тумба лабораторная подкатная:

-Аккуратно положите изделие на заднюю стенку. Вкрутите колесные опоры.

- С помощью крестовой отвертки установите ручки на лицевую сторону фасада.

6.7.10 Шкаф лабораторный вытяжной

-Аккуратно положите изделие на заднюю стенку. С помощью молотка установите заглушки в ножки и вверните в них регулируемые опоры (для моделей ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А). Отрегулируйте опоры для придания изделию устойчивого состояния. Раскачивания и перекосы не допускаются.

-С помощью крестовой отвертки установите ручки на лицевую сторону фасада.

-Установите смеситель и сифон на мойку (для моделей ШВ.02.00, ШВ.02.01, ШВ.02.00А, ШВ.02.01А). Подсоедините смеситель к трубам водоснабжения, соблюдая маркировки на рычаге смесителя (удлинительные шланги в комплект не входят). Подсоедините сифон к трубе водоотведения (удлинительная труба в комплект не входит).

-Подключите вытяжное устройство шкафов к централизованной вентиляционной системе с помощью воздуховода.

-Подключите кабель питания к сети электропитания.

6.7.11 Шкаф лабораторный

- Аккуратно положите изделие на заднюю стенку. С помощью молотка установите заглушки в ножки и вверните в них регулируемые опоры. Отрегулируйте опоры для придания изделию устойчивого состояния. Раскачивания и перекосы не допускаются.

- С помощью крестовой отвертки установите ручки на лицевой стороне фасада.

6.7.12 Шкаф лабораторный навесной

- С помощью крестовой отвертки установите ручку на лицевую сторону фасада (для моделей ШН.01.00, ШН.01.01, ШНУ.01.00; ШН.02.00, ШН.02.01).

6.7.13 Сушилка для лабораторной посуды

-Прикрепите поддон к панели сушилки при помощи саморезов.

7 Порядок работы:

7.1 После сборки/монтажа изделие готово к эксплуатации в соответствии с назначением. Указаний о порядке работы изделий набора (за исключением шкафа лабораторного вытяжного) не требуется.

7.2 Порядок работы со шкафом лабораторным вытяжным:

-Проверьте подключение кабеля питания к сети электропитания.

-Для шкафов лабораторных вытяжных серии Элит: переведите автоматический выключатель, расположенный справа на передней панели шкафа, в положение «вкл» (I).

-Включите вытяжной шкаф: переведите клавишу выключателя, расположенного справа на передней панели шкафа, в положение «вкл», при этом включится вытяжное устройство и светильник. При выполнении манипуляций, во время которых выделяются вредные вещества, включайте вытяжной шкаф за 15 минут до их начала.

-Поднимите защитный экран на необходимую высоту для совершения необходимых манипуляций и размещения требуемого оборудования и материалов на рабочей поверхности шкафа.

-Во время использования вытяжного шкафа как можно реже открывайте защитный экран.

-После окончания работы опустите защитный экран и переведите клавишу выключателя в положение «выкл».

8 Требования безопасности

8.1 Шкафы лабораторные вытяжные всех исполнений и моделей столы лабораторные островные моделей СЛО.01.00, СЛО.01.01, СЛО.02.00, СЛО.02.01, надстройки для стола моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 61010-1 и выполнены как Оборудование класса I.

8.2 По электромагнитной совместимости, при работе от источника питания, изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 61326-1.

8.3 Степень защиты электрических частей, обеспечиваемая оболочками корпуса от проникания воды и твердых частиц соответствует IP44 по ГОСТ 14254 (IEC 60529).

8.4 Корректированный уровень звукового давления должен быть не более 65 дБА для шкафа лабораторного вытяжного всех исполнений.

9 Меры предосторожности при применении медицинского изделия

9.1 К эксплуатации изделия допускаются лица, внимательно изучившие эксплуатационную документацию, описание и конструкцию изделия.

К эксплуатации шкафа лабораторного вытяжного допускается медицинский персонал, внимательно изучивший эксплуатационную документацию, освоивший правила эксплуатации и прошедший инструктаж в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок до 1000 В».

9.2 Размещайте изделие на ровной поверхности во избежание его перекосов, раскачивания и опрокидывания.

9.3 При установке изделий с регулируемыми опорами в целях компенсации неровностей пола не выкручивайте регулировочные винты неподвижных опор более 10 мм.

9.4 В случае необходимости перемещения изделия закрутите регулировочные винты во избежание их повреждения.

9.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование изделия с механическими повреждениями.

9.6 При эксплуатации изделия не допускается превышать предельные рабочие равномерно-распределенные нагрузки.

9.7 Для изделия:

- шкаф лабораторный:

9.7.1 Загрузку шкафа следует осуществлять таким образом, чтобы наибольший вес груза приходился на нижние полки.

9.7.2 Закрепите шкаф к стене для исключения риска опрокидывания в случае несоблюдения пункта 9.7.2.

9.8 Для изделий:

- шкаф лабораторный вытяжной;

- стол лабораторный островной, модели: СЛО.01.00, СЛО.01.01, СЛО.02.00, СЛО.02.01;

- надстройка для стола, модели: СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1);

9.8.1 ОСТОРОЖНО! Во избежание риска поражения электрическим током изделие должно присоединяться только к сетевому питанию, имеющему защитное заземление.

9.9 Для изделия:

- шкаф лабораторный вытяжной:

9.9.1 **ВНИМАНИЕ!** Не допускайте натяжения кабеля питания при подключении в сеть питания во избежание его повреждения.

9.9.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Пользоваться шкафами лабораторными вытяжными с разбитым стеклом или с неисправной вентиляцией.

- Загромождать рабочую поверхность шкафа оборудованием, не используемым при выполняемой работе.

- Держать защитный экран вне работы открытым.

- Работать без средств индивидуальной защиты (маска, перчатки, халат/костюм, защитные очки) при выполнении операций, проводимых с образованием пыли или мелких частиц веществ.

10 Срок службы

3.1 Средний срок службы изделия до списания - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

11 Условия хранения

11.1 Транспортирование набора мебели должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

11.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями набора в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

11.3 Условия транспортирования изделий набора крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности до 100% при температуре воздуха плюс 25°C.

11.4 Изделия набора должны храниться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

11.5 Условия хранения изделий набора в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C и относительной влажности до 98% при температуре воздуха плюс 25°C. Допускается хранение изделий набора по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

11.6 Хранение изделий набора в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

12 Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия

12.1 Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений. Эксплуатация изделия – по условиям УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от плюс 10°C до плюс 35°C.

12.2 После транспортирования или хранения в условиях отрицательных температур изделия в транспортной таре должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 3 часов.

12.3 Перед эксплуатацией изделия необходимо обследовать на целостность деталей.

12.4 Дополнительные требования к помещению для эксплуатации изделий:

12.4.1 Стол лабораторный островной:

Требование	Исполнения, для которых применимо требование
-электропитание: однофазная сеть переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 В	Серия Стандарт/Стандарт плюс/Оптима/Элит, модели: СЛО.01.00, СЛО.01.01, СЛО.02.00, СЛО.02.01
-подключение к системе водопровода, к холодной и горячей воде	Серия Стандарт/Стандарт плюс/Оптима/Элит, модели: СЛО.04.00, СЛО.04.01
-подключение к системе канализации / слива воды	

12.4.2 Надстройка для стола:

Требование	Исполнения, для которых применимо требование
-электропитание: однофазная сеть переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 В	Серия Стандарт/Стандарт плюс/Оптима/Элит, модели: СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод. I), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод. I)

12.4.3 Стол лабораторный с мойкой:

Требование	Исполнения, для которых применимо требование
-подключение к системе водопровода, к холодной и горячей воде	Серия Стандарт/Стандарт плюс/Оптима/Элит, все модели
-подключение к системе канализации / слива воды	

12.4.4 Шкаф лабораторный вытяжной:

Требование	Исполнения, для которых применимо требование
-высота потолка: не ниже 2500 мм	
-подвод к централизованной вентиляционной системе:	Серия Стандарт плюс, модели: ШВ.01.00; ШВ.01.01; ШВ.02.00; ШВ.02.01, Серия Оптима/Элит, модели: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А,
-электропитание: однофазная сеть переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 В	
-расстояние от розетки до места установки шкафа определено длиной кабеля, см. табл. 6. Внимание! Не допускайте натяжения кабеля питания при подключении в сеть питания во избежание его повреждения	
-подключение к системе водопровода, к холодной и горячей воде	Серия Стандарт плюс, модели: ШВ.02.00, ШВ.02.01, Серия Оптима/Элит, модели: ШВ.02.00А, ШВ.02.01А
-подключение к системе канализации / слива воды	Серия Стандарт плюс, модели: ШВ.02.00, ШВ.02.01, Серия Оптима/Элит, модели: ШВ.02.00А, ШВ.02.01А

13 Техническое обслуживание и ремонт

13.1 Техническое обслуживание изделий осуществляется ответственным от лица пользователя, внимательно изучившим эксплуатационную документацию, описание и конструкцию изделия, или представителями сервисной организации с целью обеспечения нормальной работы изделий в процессе их эксплуатации.

К техническому обслуживанию и ремонту шкафов лабораторных вытяжных всех исполнений и моделей, столов лабораторных островных моделей СЛО.01.00, СЛО.01.01, СЛО.02.00, СЛО.02.01, надстроек для стола моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) допускается технический персонал, изучивший настоящее руководство и прошедший инструктаж в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок до 1000 В».

13.2 Техническое обслуживание проводится перед вводом в эксплуатацию изделия и при эксплуатации не реже 1 раза в год. Техническое обслуживание изделия заключается во внешнем осмотре, при котором должно быть проверено:

- отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность изделия;
- наличие и прочность крепления;
- отсутствие слабо закрепленных элементов.

13.3 Текущий ремонт осуществляется в процессе эксплуатации для обеспечения работоспособности изделия и состоит в замене и восстановлении его отдельных частей и их регулировке.

13.4 При возникновении неисправностей, требующих ремонт, необходимо обращаться к представителю производителя (см. Раздел 16 настоящего Руководства по эксплуатации).

13.5 Дополнительные указания по техническому обслуживанию и ремонту шкафа лабораторного вытяжного:

13.5.1 При отказе шкафа лабораторного вытяжного отсоединить сетевой шнур от сети и сообщить в сервисную службу.

13.5.2 Описание неисправностей, вероятные причины их возникновения приведены в таблице 12.

Таблица 12. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения.

Описание неисправности	Вероятные причины возникновения	Устранение неисправности
Не работает светильник	Отсутствует электропитание в розетке	Сообщите техническому персоналу учреждения/ в сервисную службу
	Сетевой шнур не подсоединен к сети питания	Подключите сетевой шнур к сети питания
	Лампа выработала свой ресурс	Замените светильник
	Неисправность выключателя/электропроводки шкафа	Замените выключатель/электропроводку
Не работает вентилятор	Отсутствует электропитание в розетке	Сообщите техническому персоналу учреждения/ в сервисную службу
	Сетевой шнур не подсоединен к сети питания	Подключите сетевой шнур к сети питания
	Неисправность вентилятора	Замените вентилятор
	Неисправность выключателя/электропроводки шкафа	Замените выключатель/электропроводку
Не работает выключатель/розетка на передней панели шкафа лабораторного вытяжного	Отсутствует электропитание в розетке	Сообщите техническому персоналу учреждения/ в сервисную службу
	Сетевой шнур не подсоединен к сети питания	Подключите сетевой шнур к сети питания
	Неисправность выключателя/розетки/электропроводки шкафа	Замените выключатель/розетку/электропроводку
Нарушение целостности защитного экрана	Механическое повреждение	Замените защитный экран

13.5.3 При возникновении неисправностей, требующих ремонт, необходимо обращаться к представителю производителя (см. Раздел 16 настоящего Руководства по эксплуатации).

14 Очистка и дезинфекция

14.1 Наружные поверхности изделий устойчивы к дезинфекции в соответствии с режимами методических указаний МУ-287-113.

14.2 В качестве средств дезинфекции должны быть использованы разрешенные для этих целей в установленном порядке химические средства.

14.3 Для удаления загрязнений используйте влажную губку, смоченную в мыльном растворе.

ВНИМАНИЕ! Растворитель не применять!

14.4 Для дезинфекции используйте 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина, или аналогичным дезинфицирующим средством на водной основе, установленном для применения в конкретном лечебном учреждении, включенные в перечень дезинфицирующих средств, зарегистрированных в Российской Федерации.

14.5 Чистку и дезинфекцию следует проводить аккуратно с использованием влажной тряпки.

ВНИМАНИЕ! Запрещается разбрызгивать дезинфицирующую жидкость непосредственно на мебель. Запрещается допускать проникновение любых жидкостей в изделие через отверстия и зазоры. Игнорирование предупреждений может стать причиной поломок мебели, получения серьезных травм и повреждений при эксплуатации.

14.6 Избегайте применения твердых приспособлений при чистке таких как: скребки, губки с рабочим покрытием из твердого пластикового или металлического волокнообразного материала.

15 Порядок осуществления утилизации

15.1 Изделия не являются источником загрязнения окружающей среды.

15.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

15.3 Утилизация изделий должна производиться в соответствии с установленными нормами и правилами РФ, действующими на момент утилизации.

15.4 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А, в соответствии с ГОСТ Р 55102. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

16 Сведения о производителе

Общество с ограниченной ответственностью Медицинская Компания «АСК» (ООО МК «АСК»)

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит 3А-3А1).

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18

E-mail: zakaz@tdask.ru

www.tdask.ru

Перечень применяемых материалов

Таблица 13. Сведения о материалах изделий набора (за исключением Столиков лабораторных подкатных, Сушилки для лабораторной посуды)

Подкатных, Сушилки для лабораторной посуды)		Серия	Стандарт	Стандарт плюс	Оптим	Элит
Детали		Сведения о материалах				
Каркас мебели (за исключением шкафов лабораторных вытяжных)		- алюминевый сплав марки АД31 по ГОСТ 4784-2019; - сталь Ст2пс по ГОСТ 380-2005 с полимерно-порошковым покрытием				
Каркас шкафов лабораторных вытяжных		-	-*		- алюминевый сплав марки АД31 по ГОСТ 4784-2019; - сталь Ст2пс по ГОСТ 380-2005 с полимерно-порошковым покрытием	
Корпус		-ЛДСП марки П-А по ГОСТ 32289-2013			- бумажно-слоистый пластик HPL Компакт - LM CS-по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия	-плита древесно-волокнуистая марки МДФ по ГОСТ 32274-2021 с покрытием из бумажно-слоистого пластика по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; - полипропилен листовой по ГОСТ 26996-86; - оцинкованная сталь марки 08кп/пс по ГОСТ 14918-2020 с полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88 или сталь марки 08ПС ГОСТ 1050-2013 с полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88; - плита древесно-стружечная (ДСП) по ГОСТ 10632-2014 с покрытием из бумажно-слоистого пластика по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия

Продолжение таблицы 13.

Продолжение таблицы 19:					
Серия		Стандарт	Стандарт плюс	Оптим	Элит
Детали		Сведения о материалах			
Фасад	-ЛДСП марки П-А по ГОСТ 32289-2013; -плита древесно-волоконная марки МДФ по ГОСТ 32274-2021 с покрытием из бумажно-слоистого пластика по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; - плита древесно-волоконная марки МДФ по ГОСТ 32274-2021, облицованная пленкой ПВХ по ГОСТ 24944-81; - плита древесно-стружечная (ДСП) по ГОСТ 10632-2014 с покрытием из бумажно-слоистого пластика по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; -оцинкованная сталь марки 08кп/пс по ГОСТ 14918-2020 с полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88; или - сталь марки 08ПС ГОСТ 1050-2013 с полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88; -стекло марки М1 по ГОСТ 111-2014 (дверцы)		-бумажно-слоистый пластик HPL Компакт - LM CS по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; -оцинкованная сталь марки 08кп/пс по ГОСТ 14918-2020 с полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88; или -сталь марки 08ПС ГОСТ 1050-2013 с полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88; -стекло марки М1 по ГОСТ 111-2014 (дверцы); - алюминевый сплав марки АД31 по ГОСТ 4784-2019 (рамка стеклянной дверцы)		-плита древесно-волоконная марки МДФ по ГОСТ 32274-2021 с покрытием из бумажно-слоистого пластика по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; - плита древесно-волоконная марки МДФ по ГОСТ 32274-2021, облицованная пленкой ПВХ по ГОСТ 24944-81; - плита древесно-стружечная (ДСП) по ГОСТ 10632-2014 с покрытием из бумажно-слоистого пластика по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; -оцинкованная сталь марки 08кп/пс по ГОСТ 14918-2020 с полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88; или -сталь марки 08ПС ГОСТ 1050-2013 с полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88; -стекло марки М1 по ГОСТ 111-2014 (дверцы); - алюминевый сплав марки АД31 по ГОСТ 4784-2019 (рамка стеклянной дверцы)
Полки	-ЛДСП марки П-А по ГОСТ 32289-2013 или -плита древесно-волоконная марки МДФ по ГОСТ 32274-2021 с покрытием из бумажно-слоистого пластика по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; - бумажно-слоистый пластик HPL Компакт - LM CS по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; - оцинкованная сталь марки 08кп/пс по ГОСТ 14918-2020 с полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88; - сталь марки 08ПС ГОСТ 1050-2013 с полимерно-порошковым покрытием по ГОСТ 9.410-88; -стекло марки М1 по ГОСТ 111-2014				

Продолжение таблицы 13.

Продолжение таблицы 19				
Серия	Стандарт	Стандарт плюс	Оптим	Элит
Детали	Сведения о материалах			
Ящики выдвижные	-ЛДСП марки П-А по ГОСТ 32289-2013 (дно, задняя стенка); -плита древесно-волоконная марки МДФ по ГОСТ 32274-2021 с покрытием из бумажно-слоистого пластика по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия (дно, задняя стенка); - бумажно-слоистый пластик по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; -сталь 08пс по ГОСТ 1050-2013, с покрытием порошковой эпоксидной краской по ГОСТ 9.032-74 (каркас)			
Столешница тумб и столов	-плита древесно-волоконная марки МДФ по ГОСТ 32274-2021 с покрытием из бумажно-слоистого пластика по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; - плита древесно-стружечная (ДСП) по ГОСТ 10632-2014 с покрытием из бумажно-слоистого пластика по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; - бумажно-слоистый пластик HPL Компакт - LM CS по ТУ 2256-001-68946326-2012, производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; - плита древесно-стружечная облицованная тип «Постформинг» по ТУ 5534-002-46242352-2009 производства ООО «СКИФ», Россия; - искусственный камень марки Akrilika, производства Acryl Polimer Co.,Ltd, Китай; - искусственный камень по ГОСТ 56207-2014; - нержавеющая сталь марки AISI 430 (12X17 по ГОСТ 5632-2014); - керамический гранит по ТУ 5752-005-50184488-15 производства «Ногинский комбинат строительных изделий», Россия			
Столешница стола для весов	-плита древесно-волоконная марки МДФ по ГОСТ 32274-2021 с покрытием из бумажно-слоистого пластика по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия (столешница стола); -искусственный камень марки Akrilika производства Acryl Polimer Co.,Ltd, Китай или -искусственный камень по ГОСТ 56207-2014 (столешница под платформу весов)			
Мойка столов лабораторных островных и столов лабораторных с мойкой	- нержавеющая сталь марки 08X18H10 по ГОСТ 5632-2014		-нержавеющая сталь марки 08X18H10 по ГОСТ 5632-2014 или -искусственный камень марки Akrilika производства Acryl Polimer Co.,Ltd, Китай или - искусственный камень по ГОСТ 56207-2014 или полипропилен листовой по ГОСТ 26996-86	
Экран шкафов лабораторных вытяжных	-	- стекло марки М1 по ГОСТ 111-2014 (экран), - алюминиевый сплав марки АД31 по ГОСТ 4784-2019 (рамка)		
Столешница шкафов лабораторных вытяжных	-	- керамическая плитка ГОСТ 6141-91 -плита древесно-волоконная марки МДФ по ГОСТ 32274-2021 с покрытием из бумажно-слоистого пластика по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; - бумажно-слоистый пластик HPL Компакт - LM CS по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; - искусственный камень марки Akrilika производства Acryl Polimer Co.,Ltd, Китай; - искусственный камень по ГОСТ 56207-2014; - нержавеющая сталь марки AISI 430 (12X17 по ГОСТ 5632-2014); - керамический гранит по ТУ 5752-005-50184488-15 производства «Ногинский комбинат строительных изделий», Россия		

Продолжение таблицы 13.

Продолжение таблицы 19.				
Серия	Стандарт	Стандарт плюс	Оптимум	Элит
Детали		Сведения о материалах		
Раковина лабораторная для шкафов лабораторных вытяжных	-	- керамика производства ЗАО «Лобненский Завод Стройфарфор» - полипропилен листовой по ГОСТ 26996-86 - нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-2014		
Ручки мебельные	сплав марки ЦА4М1 по ГОСТ 25140-93			

Примечание:

*-шкафы лабораторные вытяжные в серии Стандарт плюс производятся без каркаса

Таблица 14. Сведения о материалах Сушилки для лабораторной посуды

Детали	Сведения о материалах
Панель, держатели, поддон	-нержавеющая сталь марки 08Х18Н10 по ГОСТ 5632-2014

Таблица 15. Сведения о материалах Столиков лабораторных подкатных

Детали	Сведения о материалах
Каркас	- алюминиевый сплав марки АД31 по ГОСТ 4784-2019
Фасады	-бумажно-слоистый пластик HPL Компакт - LM CS по ТУ 2256-001-68946326-2012, производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; -плита древесно-волоконная марки МДФ по ГОСТ 32274-2021 с покрытием из бумажно-слоистого пластика по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; или - плита древесно-волоконная марки МДФ по ГОСТ 32274-2021, облицованная пленкой ПВХ по ГОСТ 24944-81; - плита древесно-стружечная (ДСП) по ГОСТ 10632-2014 с покрытием из бумажно-слоистого пластика по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; - бумажно-слоистый пластик HPL Компакт - LM CS по ТУ 2256-001-68946326-2012, производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; - алюминиевый сплав марки АД31 по ГОСТ 4784-2019 (рамка)
Полки	-стекло марки М1 по ГОСТ 111-2014 -бумажно-слоистый пластик HPL Компакт - LM CS по ТУ 2256-001-68946326-2012, производства ООО «ЛЕМАРК», Россия
Ящики выдвижные	- сталь марки 08пс по ГОСТ 1050, с покрытием порошковой эпоксидной краской по ГОСТ 9.032 (каркас), - ЛДСП** марки П-А по ГОСТ 32289-2013 (дно, задняя стенка)
Столешница	-плита древесно-волоконная марки МДФ по ГОСТ 32274-2021 с покрытием из бумажно-слоистого пластика по ТУ 2256-001-68946326-2012 производства ООО «ЛЕМАРК», Россия; - бумажно-слоистый пластик HPL Компакт - LM CS по ТУ 2256-001-68946326-2012, производства ООО «ЛЕМАРК», Россия;
Ручки мебельные	-сплав марки ЦА4М1 по ГОСТ 25140-93

Указания по электромагнитной обстановке

для изделий:

-Шкаф лабораторный вытяжной, серии: Стандарт плюс, модели: ШВ.01.00; ШВ.01.01; ШВ.02.00; ШВ.02.01;

-Шкаф лабораторный вытяжной, серии: Оптима, модели: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А;

-Шкаф лабораторный вытяжной, серии: Оптима, модели: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А»

(далее – Шкаф лабораторный вытяжной)

Таблица 16 Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия

Шкаф лабораторный вытяжной предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю изделия следует обеспечить его применение в указанной обстановке		
Испытание на электромагнитную эмиссию	Соответствие	Электромагнитная обстановка - указания
Радиопомехи по СИСПР 11	Группа 1	Шкаф лабораторный вытяжной использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования, расположенного вблизи электронного оборудования
Радиопомехи по СИСПР 11	Класс А	Шкаф лабораторный вытяжной пригоден для применения в любых местах размещения, включая жилые дома и здания, непосредственно подключенные к электрической сети общего назначения, питающей жилые здания
Гармонические составляющие потребляемого тока по МЭК 61000-3-2	Класс А	
Гармонические составляющие потребляемого тока по МЭК 61000-3-3	Соответствует	

Таблица 17. Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость

Шкаф лабораторный вытяжной предназначается для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю изделия следует обеспечить его применение в указанной обстановке			
Испытания на помехоустойчивость	Испытательный уровень по ГОСТ Р МЭК 61326-1	Уровень соответствия	Электромагнитная обстановка - указания
Электростатические разряды (ЭСР) по МЭК 61000-4-2	4 кВ - контактный разряд 8 кВ - воздушный разряд	4 кВ- контактный разряд 8 кВ -воздушный разряд	Полы должны быть выполнены из дерева, бетона или керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, то относительная влажность воздуха должна составлять не менее 30 %
Наносекундные импульсные помехи по МЭК 61000-4-4	2 кВ (5/50нс, 5 кГц) для линий электропитания 1 кВ (5/50нс, 5 кГц) - для линий ввода-вывода	2 кВ (5/50нс, 5 кГц) для линий электропитания 1 кВ (5/50нс, 5 кГц) - для линий ввода-вывода	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки
Микросекундные импульсные помехи большой энергии по МЭК 61000-4-5	1 кВ/2кВ - при подаче помехи по схеме «провод-провод» ±2 кВ - при подаче помехи по схеме «провод-земля»	1 кВ/2кВ - при подаче помехи по схеме «провод-провод» ±2 кВ - при подаче помехи по схеме «провод-земля»	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки
Провалы, прерывания и изменения напряжения во входных линиях электропитания по МЭК 61000-4-11	0%, 1-й период 40%, 10/12 периодов 70%, 25/30 периодов	0%, 1-й период 40%, 10/12 периодов 70%, 25/30 периодов	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больничной обстановки Если пользователю требуется непрерывная работа в условиях прерывания сетевого напряжения, рекомендуется обеспечить подключение мебели от источника бесперебойного питания
Магнитное поле промышленной частоты по МЭК 61000-4-8	30 А/м (50 Гц, 60 Гц)	30 А/м (50 Гц, 60 Гц)	Уровни магнитного поля промышленной частоты следует обеспечить в соответствии с типичными условиями коммерческой или больничной обстановки
Примечание - U_T - уровень напряжения электрической сети до момента подачи испытательного воздействия			

Таблица 18. Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость

Шкаф лабораторный вытяжной предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю изделия следует обеспечить его применение в указанной обстановке

Испытания на помехоустойчивость	Испытательный уровень по ГОСТ Р МЭК 61326-1	Уровень соответствия	Электромагнитная обстановка - указания
			Расстояние между используемой мобильной радиотелефонной системой связи и любым элементом шкафа, включая кабели, должно быть не меньше рекомендуемого пространственного разнеса, который рассчитывается в соответствии с приведенным ниже выражением применительно к частоте передатчика. Рекомендуемый пространственный разнос составляет
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными помехами по МЭК 61000-4-6	3 В (от 150 кГц до 80 МГц) (среднеквадратичное значение)	3 В (от 150 кГц до 80 МГц) (среднеквадратичное значение)	$d = 1,2 \sqrt{P}$
Излучаемое радиочастотное электромагнитное поле по МЭК 61000-4-3	10 В/м (от 80 МГц до 1 ГГц) 3 В/м (от 1,4 ГГц до 2 ГГц) 1 В/м (от 2 ГГц до 2,7 ГГц)	10 В/м (от 80 МГц до 1 ГГц) 3 В/м (от 1,4 ГГц до 2 ГГц) 1 В/м (от 2 ГГц до 2,7 ГГц)	$d = 1,2 \sqrt{P}$ (от 80 до 800 МГц); $d = 2,3 \sqrt{P}$ (от 800 МГц до 2,5 ГГц).
			Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков по результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой ^{а)} должна быть ниже, чем уровень соответствия в каждой полосе частот ^{б)} Влияние помех может иметь место вблизи оборудования, маркированного знаком 

^{а)} Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных) и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, АМ и FM радиовещательных передатчиков, телевизионных передатчиков, не может быть определена расчетным путем с достаточной точностью. Для этого должны быть осуществлены практические измерения напряженности поля. Если измеренные значения в месте размещения мебели выше применимых уровней соответствия, то следует проводить наблюдения за работой мебели с целью проверки ее нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется отклонение от нормального функционирования, то необходимо принять дополнительные меры, такие как переориентировка или перемещение мебели.

б) Вне полосы частот от 150 кГц до 80 МГц следует обеспечить напряженность поля менее 1 В/м. Примечания 1 На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля. 2 Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.
--

Таблица 19 - Рекомендуемые значения пространственного разнеса между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи и Шкафом лабораторным вытяжным

Шкаф лабораторный вытяжной предназначен для применения в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь изделия может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечивая минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и шкафом, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи			
Номинальная максимальная выходная мощность передатчика, Вт	Пространственный разнос, м, в зависимости от частоты передатчика		
	$d = 1,2 \sqrt{P}$ в полосе от 150 кГц до 80 МГц	$d = 1,2 \sqrt{P}$ в полосе от 80 до 800 МГц	$d = 2,3 \sqrt{P}$ в полосе от 800 МГц до 2,5 ГГц
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,20	1,20	2,30
10	3,79	3,79	7,27
100	12,00	12,00	23,00
Примечания 1 На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля. 2 Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей. 3 При определении рекомендуемых значений пространственного разнеса d для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность P в ваттах, указанную в документации изготовителя передатчика.			

Перечень стандартов, на которые даны ссылки в настоящем руководстве по эксплуатации

Обозначение	Наименование
ГОСТ 9.014-78	ЕСЗКС Временная противокоррозионная защита изделий. Общие технические требования
ГОСТ 9.303-84	ЕСЗКС Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия
ГОСТ Р 52901-2007	Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 12969-67	Таблички для машин и приборов. Технические требования.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16371-2014	Мебель. Общие технические условия.
ГОСТ 19882	Мебель корпусная. Методы испытаний на устойчивость, прочность и деформируемость.
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические условия
ГОСТ 14193-78	Монохлорамин ХБ технический. Технические условия
ГОСТ 31508-2012	Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования.
ГОСТ IEC 61010-1-2014	Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014	Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
МУ-287-113	Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы
ГОСТ Р 55102-2012	Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руководство по безопасному сбору, хранению, транспортированию и разборке отработавшего электротехнического и электронного оборудования, за исключением ртутьсодержащих устройств и приборов.
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Всего прошито и пронумеровано 55
(пятьдесят пять) лист об

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н. _____



ООО МК «АСК»



СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ

Серии:	Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит
Модели:	СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03; СЛ.04.00

Паспорт
СЛ.00.00 ПС.02

г. Нижний Новгород

Версия 3.0

Оглавление

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	7
4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	10
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	11
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	11
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	12
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	13
Приложение 1.....	14

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Стол лабораторный, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03; СЛ.04.00. Далее по тексту – Изделие, Стол. Изделие выпускается по ТУ 9452-001-68690950-2011 в составе вариантов исполнения:

- I. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт»
- II. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»
- III. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Оптима»
- IV. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит»
- V. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ»

медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011»

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Принадлежности.** Стол лабораторный при необходимости может комплектоваться принадлежностями: Надстройка для стола, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: СЛН.01.00, СЛН.01.00 (мод.1.), СЛН.01.01, СЛН.01.01 (мод.1), СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1.), СЛН.02.00, СЛН.02.00 (мод.1.), СЛН.03.00, СЛН.03.00 (мод.1.), СЛН.03.01, СЛН.03.01 (мод.1.), СЛН.04.00, СЛН.04.00 (мод.1.), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1.) (См. Раздел 3 настоящего паспорта). Надстройка для стола предназначена для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинико-диагностических лабораториях.

2.3 Сведения о производителе:

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А-3А1)

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.4 **Назначение изделия:** предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинико-диагностических лабораториях.

2.5 Потенциальный потребитель – медицинский работник.

2.6 Область применения - клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций.

2.7 Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.8 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

2.9 Основные технические характеристики изделия приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типораз- мерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ							
1	Стол лабораторный, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптимал/ Элит	СЛ.00.00	800÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.00.01	1000÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020**	750÷950	50
		СЛ.01.00	1000÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.01.01	1000÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.01.02	1000÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.01.03	1000÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.02.00	1500÷1800	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.02.01	1500÷1800	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.02.02	1500÷1800	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.03.00	2700÷3000	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.03.01	2700÷3000	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.03.02	2700÷3000	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.03.03	2700÷3000	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
		СЛ.04.00	900÷1500	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50
НАДСТРОЙКИ ДЛЯ СТОЛА							
2	Надстройка для стола, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптимал/ Элит	СЛН.01.00	945÷1445	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.01.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.01.01	945÷1445	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.01.01 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.01.02	945÷1445	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.01.02 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.02.00	945÷1445	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.02.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.03.00	945÷1445	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.03.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000		10

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типораз- мерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ							
		СЛН.03.01	1445÷1745	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.03.01 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.04.00	1445÷1745	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.04.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.05.00	945÷1445	250÷400	600÷1000		10
		СЛН.05.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000		10

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8); габаритные размеры для изделий одной модели, изготовленных в исполнениях серии Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, одинаковые, за исключением размеров, помеченных (**) или (***)

**-габаритная высота изделия серии Стандарт/Стандарт плюс/Оптима;

***- габаритная высота изделия серии Элит.

2.10 Масса изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг			
			Серия Стандарт	Серия Стандарт Плюс	Серия Оптима	Серия Элит
1	2	3	5	6	7	8
1	Стол лабораторный	СЛ.00.00	57	68	52	72
		СЛ.00.01	82	94	73	99
		СЛ.01.00	90	98	85	101
		СЛ.01.01	76	89	71	94
		СЛ.01.02	93	106	86	111
		СЛ.01.03	108	120	111	126
		СЛ.02.00	155	170	147	177
		СЛ.02.01	130	145	120	152
		СЛ.02.02	107	122	98	129
		СЛ.03.00	198	223	190	232
		СЛ.03.01	176	201	163	210
		СЛ.03.02	156	181	145	190
		СЛ.03.03	224	249	194	259
		СЛ.04.00	87	102	74	107
2	Принадлежность: Настройка для стола	СЛН.01.00	25	28	25	29
		СЛН.01.00 (мод.1)	28	31	28	32
		СЛН.01.01	29	31	30	35
		СЛН.01.01 (мод.1)	32	34	33	38
		СЛН.01.02	30	33	28	34
		СЛН.01.02 (мод.1)	36	39	34	40
		СЛН.02.00	39	42	35	43
		СЛН.02.00 (мод.1)	47	50	43	51
		СЛН.03.00	43	46	41	47

	СЛН.03.00 (мод.1)	51	54	43	55
	СЛН.03.01	47	50	45	51
	СЛН.03.01 (мод.1)	57	61	43	63
	СЛН.04.00	61	65	49	67
	СЛН.04.00 (мод.1)	62	66	55	67
	СЛН.05.00	61	65	55	67
	СЛН.05.00 (мод.1)	74	78	66	80

2.11 Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка изделий указана в таблице 3.
Таблица 3.

№	Наименование изделия			Предельная рабочая равномерно- распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Серия	Модель	
1	2	3	4	5
1	Стол лабораторный	Стандарт	СЛ.00.00, СЛ.00.01, СЛ.04.00	- на столешницу – 70 - на дно ящика – 10
		Стандарт плюс		
		Оптим		
		Элит		
2	Стол лабораторный	Стандарт	СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02;	- на столешницу – 100 - на полку и дно ящика – 10
		Стандарт плюс	СЛ.01.03; СЛ.02.00; СЛ.02.01;	
		Оптим	СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01;	
		Элит	СЛ.03.02; СЛ.03.03	
3	Стол лабораторный островной	Стандарт	СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00;	- на столешницу – 100 - на полку и дно ящика – 10
		Стандарт плюс	СЛО.02.01; СЛО.03.00; СЛО.03.01;	
		Оптим	СЛО.03.02; СЛО.04.00	
		Элит		
4	Принадлеж- ность: Надстройка для стола	Стандарт	СЛН.01.00, СЛН.01.00 (мод.1),	- на полку - 10
		Стандарт плюс	СЛН.01.01, СЛН.01.01 (мод.1),	
		Оптим	СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1),	
		Элит	СЛН.02.00, СЛН.02.00 (мод.1), СЛН.03.00, СЛН.03.00 (мод.1), СЛН.03.01, СЛН.03.01 (мод.1), СЛН.04.00, СЛН.04.00 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1)	

2.12 На надстройках для стола моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) установлены розетки с заземляющим контактом и защитной крышкой для подключения потребителей электропитания от внешней однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 В.

Надстройки для стола моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) имеют по 1 розетке.

2.13 Розетка надстроек для столов моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) работоспособна при подключении электропотребителя с максимальной номинальной потребляемой мощностью не более 2,2 кВт.

2.14 Стол устанавливается на неподвижные опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Опоры изделий имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4.1 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Стандарт, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Стандарт, модели*: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе:	СЛ.00.00.С; СЛ.00.01.С; СЛ.01.00.С; СЛ.01.01.С; СЛ.01.02.С; СЛ.01.03.С; СЛ.04.00.С	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт – 1 шт., модели*: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.С; СЛН.01.01.С; СЛН.01.02.С; СЛН.02.00.С; СЛН.03.00.С; СЛН.03.01.С; СЛН.04.00.С; СЛН.05.00.С	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.2 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Стандарт, модели: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Стандарт, модели*: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе:	СЛ.02.00.С; СЛ.02.01.С; СЛ.02.02.С; СЛ.03.00.С; СЛ.03.01.С; СЛ.03.02.С; СЛ.03.03.С	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт – 1 шт., модели*: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1).С; СЛН.01.01 (мод.1).С; СЛН.01.02 (мод.1).С; СЛН.02.00 (мод.1).С; СЛН.03.00 (мод.1).С; СЛН.03.01 (мод.1).С; СЛН.04.00 (мод.1).С; СЛН.05.00 (мод.1).С	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.3 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Стандарт плюс, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Стандарт плюс, модели*: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе:	СЛ.00.00.Сп; СЛ.00.01.Сп; СЛ.01.00.Сп; СЛ.01.01.Сп; СЛ.01.02.Сп; СЛ.01.03.Сп; СЛ.04.00.Сп	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.3	Принадлежности: (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт плюс – 1 шт., модели*: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.Сп; СЛН.01.01.Сп; СЛН.01.02.Сп; СЛН.02.00.Сп; СЛН.03.00.Сп; СЛН.03.01.Сп; СЛН.04.00.Сп; СЛН.05.00.Сп	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.4 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Стандарт плюс, модели: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Стандарт плюс, модели*: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе:	СЛ.02.00.Сп; СЛ.02.01.Сп; СЛ.02.02.Сп; СЛ.03.00.Сп; СЛ.03.01.Сп; СЛ.03.02.Сп; СЛ.03.03.Сп	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Принадлежности: (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт плюс – 1 шт., модели*: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1).Сп; СЛН.01.01 (мод.1).Сп; СЛН.01.02 (мод.1).Сп; СЛН.02.00 (мод.1).Сп; СЛН.03.00 (мод.1).Сп; СЛН.03.01 (мод.1).Сп; СЛН.04.00 (мод.1).Сп; СЛН.05.00 (мод.1).Сп	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.5 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Оптима, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Оптима, модели*: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе:	СЛ.00.00.О; СЛ.00.01.О; СЛ.01.00.О; СЛ.01.01.О; СЛ.01.02.О; СЛ.01.03.О; СЛ.04.00.О	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Принадлежности: (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Оптима – 1 шт., модели*: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.О; СЛН.01.01.О; СЛН.01.02.О; СЛН.02.00.О; СЛН.03.00.О; СЛН.03.01.О; СЛН.04.00.О; СЛН.05.00.О	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.6 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Оптима, модели: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Оптима, модели*: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе:	СЛ.02.00.О; СЛ.02.01.О; СЛ.02.02.О; СЛ.03.00.О; СЛ.03.01.О; СЛ.03.02.О; СЛ.03.03.О	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Оптима – 1 шт., модели*: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1).О; СЛН.01.01 (мод.1).О; СЛН.01.02 (мод.1).О; СЛН.02.00 (мод.1).О; СЛН.03.00 (мод.1).О; СЛН.03.01 (мод.1).О; СЛН.04.00 (мод.1).О; СЛН.05.00 (мод.1).О	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.7 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Элит, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03; СЛ.04.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Элит, модели*: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.04.00, в составе:	СЛ.00.00.Э; СЛ.00.01.Э; СЛ.01.00.Э; СЛ.01.01.Э; СЛ.01.02.Э; СЛ.01.03.Э; СЛ.04.00.Э	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Принадлежности: (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Элит – 1 шт., модели*: СЛН.01.00; СЛН.01.01; СЛН.01.02; СЛН.02.00; СЛН.03.00; СЛН.03.01; СЛН.04.00; СЛН.05.00	СЛН.01.00.Э; СЛН.01.01.Э; СЛН.01.02.Э; СЛН.02.00.Э; СЛН.03.00.Э; СЛН.03.01.Э; СЛН.04.00.Э; СЛН.05.00.Э	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.8 Комплектность изделия «Стол лабораторный, вариант исполнения: Стол лабораторный, серия Элит, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03; СЛ.04.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный, серия Элит, модели*: СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03, в составе:	СЛ.02.00.Э; СЛ.02.01.Э; СЛ.02.02.Э; СЛ.03.00.Э; СЛ.03.01.Э; СЛ.03.02.Э; СЛ.03.03.Э	1
1.1	- Стол лабораторный – 1 шт.		

1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛ.00.00 ПС.02	
1.3	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Элит – 1 шт., модели*: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1)	СЛН.01.00 (мод.1).Э; СЛН.01.01 (мод.1).Э; СЛН.01.02 (мод.1).Э; СЛН.02.00 (мод.1).Э; СЛН.03.00 (мод.1).Э; СЛН.03.01 (мод.1).Э; СЛН.04.00 (мод.1).Э; СЛН.05.00 (мод.1).Э	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Срок службы

4.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

4.2. Условия транспортирования и хранения

4.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности до 100% при температуре плюс 25°С.

4.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

4.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

4.3. Утилизация

4.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

4.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

4.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

4.4. Гарантии изготовителя

4.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

4.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол лабораторный: _____
серия модель

Принадлежность: Надстройка для стола: _____
серия модель

Дата изготовления: _____
месяц, число

Заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стол лабораторный: _____
серия модель

Принадлежность: Надстройка для стола: _____
серия модель

заводской номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-001-68690950-2012.

Дата упаковывания _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А – 3А1). ООО МК «АСК».

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Стол лабораторный: _____
серия модель

Принадлежность: Надстройка для стола: _____
серия модель

заводской № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

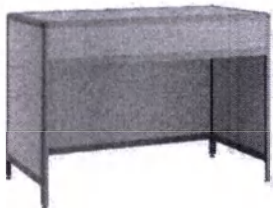
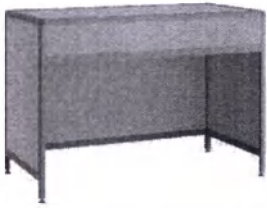
Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

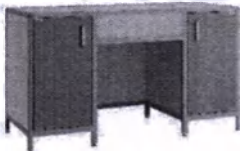
Исполнитель _____
подпись

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (НАДСТРОЙКА ДЛЯ СТОЛА):

Таблица 5. Стол лабораторный, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: СЛ.00.00; СЛ.00.01; СЛ.01.00; СЛ.01.01; СЛ.01.02; СЛ.01.03; СЛ.02.00; СЛ.02.01; СЛ.02.02; СЛ.03.00; СЛ.03.01; СЛ.03.02; СЛ.03.03; СЛ.04.00.

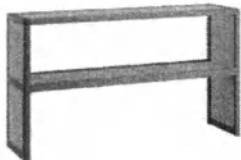
Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
СЛ.00.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛ.00.01	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛ.01.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

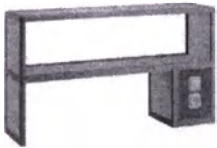
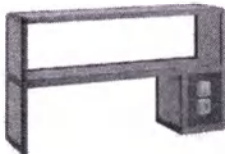
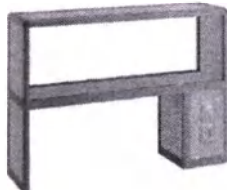
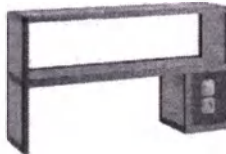
СЛ.01.01	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛ.01.02	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛ.01.03	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛ.02.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛ.02.01	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

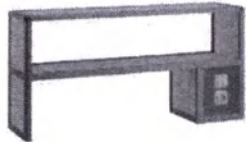
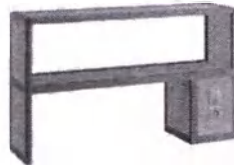
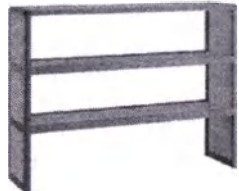
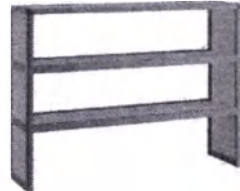
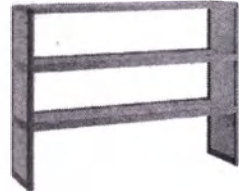
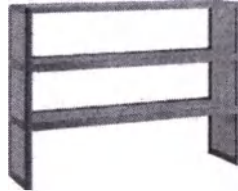
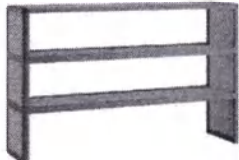
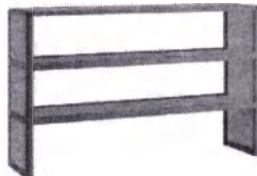
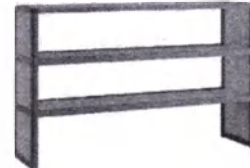
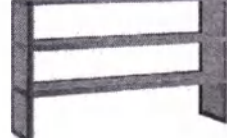
СЛ.02.02	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛ.03.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛ.03.01	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛ.03.02	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛ.03.03	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

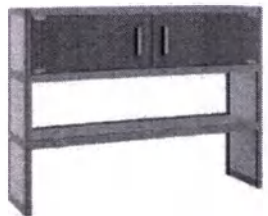
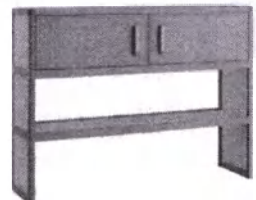
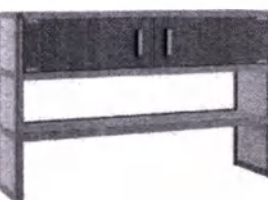
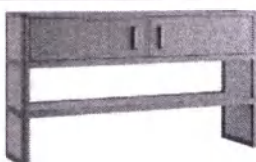
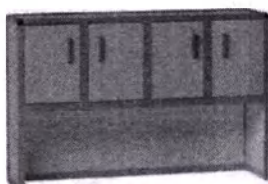
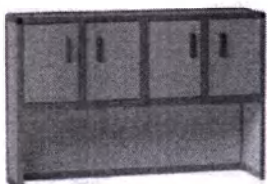
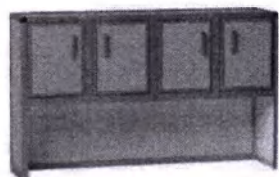
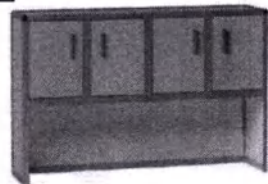
СЛ.04.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
----------	--	---	--	--

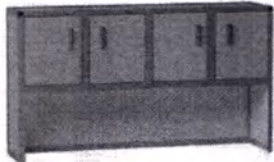
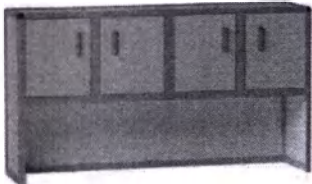
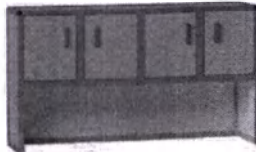
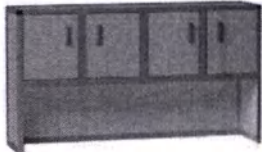
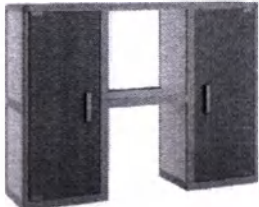
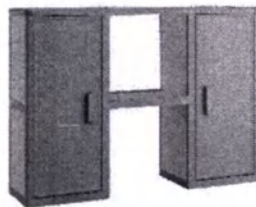
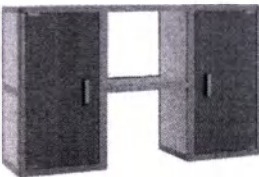
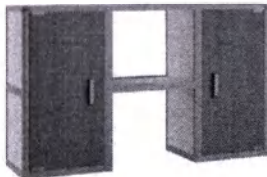
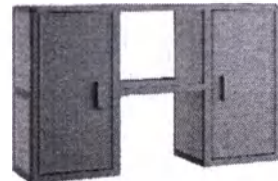
Таблица 6. Надстройка для стола, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: СЛН.01.00, СЛН.01.00 (мод.1.), СЛН.01.01, СЛН.01.01 (мод.1), СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1.), СЛН.02.00, СЛН.02.00 (мод.1.), СЛН.03.00, СЛН.03.00 (мод.1.), СЛН.03.01, СЛН.03.01 (мод.1.), СЛН.04.00, СЛН.04.00 (мод.1.), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1.).

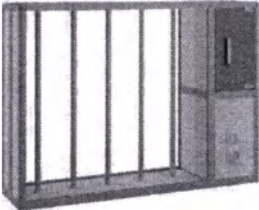
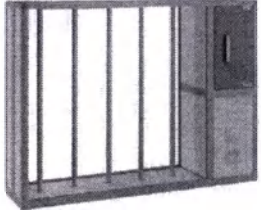
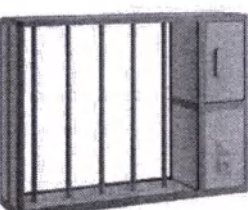
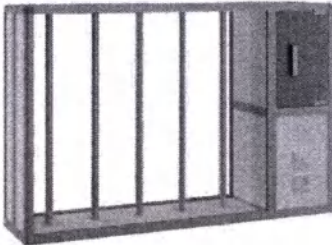
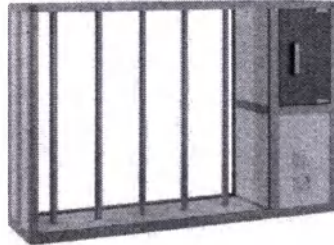
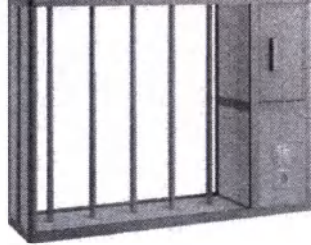
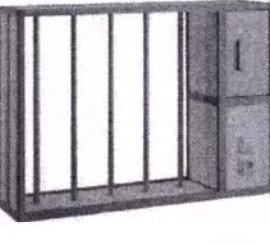
Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
СЛН.01.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛН.01.00 (мод.1)	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
СЛН.01.01				
СЛН.01.01 (мод.1)				
СЛН.01.02	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптимa	Элит
СЛН.01.02 (мод.1)	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛН.02.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛН.02.00 (мод.1)	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптимa	Элит
СЛН.03.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛН.03.00 (мод.1)	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛН.03.01	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
СЛН.03.01 (мод.1)	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛН.04.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛН.04.00 (мод.1)	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
СЛН.05.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛН.05.00 (мод.1)	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Всего прошито и пронумеровано 22
(двадцать два) лист 9

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.

25.12.2023



ООО МК «АСК»



СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ОСТРОВНОЙ

Серии:	Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит			
Модели:	СЛО.01.00;	СЛО.01.01;	СЛО.02.00;	СЛО.02.01;
	СЛО.03.00;	СЛО.03.01;	СЛО.03.02;	СЛО.04.00

Паспорт
СЛО.00.00 ПС.02

г. Нижний Новгород

Версия 3.0

Оглавление

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	6
4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	9
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	10
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	10
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	10
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	11
Приложение 1.....	12

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Наименование изделия: Стол лабораторный островной, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02; СЛО.04.00. Далее по тексту – Изделие, Стол.

Изделие выпускается по ТУ 9452-001-68690950-2011 в составе вариантов исполнения:

- I. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт»
- II. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»
- III. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Оптима»
- IV. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит»
- V. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ»

медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011»

Регистрационное удостоверение _____

2.2 Принадлежности. Стол лабораторный островной, моделей: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02 при необходимости может комплектоваться принадлежностями: Надстройка для стола, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: СЛН.01.00 (мод.1.), СЛН.01.01 (мод.1.), СЛН.01.02 (мод.1.), СЛН.02.00 (мод.1.), СЛН.03.00 (мод.1.), СЛН.03.01 (мод.1.), СЛН.04.00 (мод.1.), СЛН.05.00 (мод.1.) (См. Раздел 3 настоящего паспорта). Надстройка для стола предназначена для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинико-диагностических лабораториях.

2.3 Сведения о производителе:

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Фактический адрес: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А-3А1)

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.4 Назначение изделия: предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинико-диагностических лабораториях.

2.5 Потенциальный потребитель – медицинский работник.

2.6 Область применения - клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций.

2.7 Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.8 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

2.9 Основные технические характеристики изделия приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типораз- мерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСТРОВНЫЕ							
1	Стол лабораторный островной, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптимал/ Элит	СЛО.01.00	1200÷1700	1200÷1400	1400÷1800	1400÷1800	50
		СЛО.01.01	1200÷1700	1200÷1400	1400÷1800	1400÷1800	50
		СЛО.02.00	1200÷1700	1200÷1400	1400÷1800	1400÷1800	50
		СЛО.02.01	1200÷1700	1200÷1400	1400÷1800	1400÷1800	50
		СЛО.03.00	1500÷1700	1200÷1400	750÷950	750÷950	50
		СЛО.03.01	1500÷1700	1200÷1400	750÷950	750÷950	50
		СЛО.03.02	1500÷1700	1200÷1400	750÷950	750÷950	50
		СЛО.04.00	2700÷3000	1200÷1400	1400÷1800	1400÷1800	50
		СЛО.04.01	3700÷4000	1200÷1400	1400÷1500	1400÷1500	50
НАДСТРОЙКИ ДЛЯ СТОЛА							
2	Надстройка для стола, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптимал/ Элит	СЛН.01.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.01.01 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.01.02 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.02.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.03.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.03.01 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.04.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10
		СЛН.05.00 (мод.1)	1445÷1745	250÷400	600÷1000	-	10

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8); габаритные размеры для изделий одной модели, изготовленных в исполнениях серии Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, одинаковые, за исключением размеров, помеченных (**) или (***).

**-габаритная высота изделия серии Стандарт/Стандарт плюс/Оптимал;

***- габаритная высота изделия серии Элит.

2.10 Масса изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг			
			Серия Стандарт	Серия Стандарт Плюс	Серия Оптимa	Серия Элит
1	2	3	5	6	7	8
1	Стол лабораторный островной	СЛО.01.00	112	135	90	141
		СЛО.01.01	140	163	112	169
		СЛО.02.00	158	190	138	196
		СЛО.02.01	229	261	205	270
		СЛО.03.00	214	244	195	258
		СЛО.03.01	260	290	240	300
		СЛО.03.02	310	340	294	354
		СЛО.04.00	404	452	385	470
		СЛО.04.01	605	680	575	698
2	Принадлежность: Надстройка для стола	СЛН.01.00 (мод.1)	28	31	28	32
		СЛН.01.01 (мод.1)	32	34	33	38
		СЛН.01.02 (мод.1)	36	39	34	40
		СЛН.02.00 (мод.1)	47	50	43	51
		СЛН.03.00 (мод.1)	51	54	43	55
		СЛН.03.01 (мод.1)	57	61	43	63
		СЛН.04.00 (мод.1)	62	66	55	67
		СЛН.05.00 (мод.1)	74	78	66	80

2.11 Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка изделий указана в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование изделия			Предельная равномерно- распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Серия	Модель	
1	2	3	4	5
1	Стол лабораторный островной	Стандарт	СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02; СЛО.04.00	- на столешницу – 100 - на полку и дно ящика – 10
		Стандарт плюс		
		Оптимa		
		Элит		
2	Принадлеж- ность: Надстройка для стола	Стандарт	СЛН.01.00 (мод.1), СЛН.01.01 (мод.1), СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.02.00 (мод.1), СЛН.03.00 (мод.1), СЛН.03.01 (мод.1), СЛН.04.00 (мод.1), СЛН.05.00 (мод.1)	- на полку - 10
		Стандарт плюс		
		Оптимa		
		Элит		

2.12 На столах лабораторных островных моделей СЛО.01.00, СЛО.01.01, СЛО.02.00, СЛО.02.01, надстройках для стола моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) установлены розетки с заземляющим контактом и защитной крышкой для подключения потребителей электропитания от внешней однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 В.

Столы лабораторные островные моделей СЛО.01.00, СЛО.01.01, СЛО.02.00, СЛО.02.01,

надстройки для стола моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) имеют по 1 розетке.

2.13 Розетка столов лабораторных островных моделей СЛО.01.00, СЛО.01.01, СЛО.02.00, СЛО.02.01, надстроек для столов моделей СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1) работоспособна при подключении электропотребителя с максимальной номинальной потребляемой мощностью не более 2,2 кВт.

2.14 Стол устанавливается на неподвижные опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Опоры изделий имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4.1 Комплектность изделия «Стол лабораторный островной, вариант исполнения: Стол лабораторный островной, серия Стандарт, модели: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный островной, серия Стандарт, модели*: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01, в составе:	СЛО.01.00.С; СЛО.01.01.С; СЛО.02.00.С; СЛО.02.01.С; СЛО.04.00.С; СЛО.04.01.С	1
1.1	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	

Таблица 4.2 Комплектность изделия «Стол лабораторный островной, вариант исполнения: Стол лабораторный островной, серия Стандарт, модели: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный островной, серия Стандарт, модели*: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02, в составе:	СЛО.03.00.С; СЛО.03.01.С; СЛО.03.02.С	1
1.1	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
1.3	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1).	СЛН.01.00 (мод.1).С; СЛН.01.01 (мод.1).С; СЛН.01.02 (мод.1).С; СЛН.02.00 (мод.1).С; СЛН.03.00 (мод.1).С; СЛН.03.01 (мод.1).С; СЛН.04.00 (мод.1).С; СЛН.05.00 (мод.1).С	

Таблица 4.3 Комплектность изделия «Стол лабораторный островной, вариант исполнения: Стол лабораторный островной, серия Стандарт плюс, модели: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный островной, серия Стандарт плюс, модели*: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01, в составе:	СЛО.01.00.Сп; СЛО.01.01.Сп; СЛО.02.00.Сп; СЛО.02.01.Сп; СЛО.04.00.Сп; СЛО.04.01.Сп	1
1.1	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	

Таблица 4.4 Комплектность изделия «Стол лабораторный островной, вариант исполнения: Стол лабораторный островной, серия Стандарт плюс, модели: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный островной, серия Стандарт плюс, модели*: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02, в составе:	СЛО.03.00.Сп; СЛО.03.01.Сп; СЛО.03.02.Сп	1
1.1	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.		
1.3	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Стандарт плюс – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1).	СЛН.01.00 (мод.1).Сп; СЛН.01.01 (мод.1).Сп; СЛН.01.02 (мод.1).Сп; СЛН.02.00 (мод.1).Сп; СЛН.03.00 (мод.1).Сп; СЛН.03.01 (мод.1).Сп; СЛН.04.00 (мод.1).Сп; СЛН.05.00 (мод.1).Сп	

Таблица 4.5 Комплектность изделия «Стол лабораторный островной, вариант исполнения: Стол лабораторный островной, серия Оптима, модели: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный островной, серия Оптима, модели*: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01, в составе:	СЛО.01.00.О; СЛО.01.01.О; СЛО.02.00.О; СЛО.02.01.О; СЛО.04.00.О; СЛО.04.01.О	1
1.1	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.		

Таблица 4.6 Комплектность изделия «Стол лабораторный островной, вариант исполнения: Стол лабораторный островной, серия Оптима, модели: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный островной, серия Оптима, модели*: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02, в составе:	СЛО.03.00.О; СЛО.03.01.О; СЛО.03.02.О	1
1.1	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.		

1.3	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Оптима – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1).	СЛН.01.00 (мод.1).О; СЛН.01.01 (мод.1).О; СЛН.01.02 (мод.1).О; СЛН.02.00 (мод.1).О; СЛН.03.00 (мод.1).О; СЛН.03.01 (мод.1).О; СЛН.04.00 (мод.1).О; СЛН.05.00 (мод.1).О	
-----	---	---	--

Таблица 4.7 Комплектность изделия «Стол лабораторный островной, вариант исполнения: Стол лабораторный островной, серия Элит, модели: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный островной, серия Элит, модели*: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01, в составе:	СЛО.01.00.Э; СЛО.01.01.Э; СЛО.02.00.Э; СЛО.02.01.Э; СЛО.04.00.Э; СЛО.04.01.Э	1
1.1	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
1.3	Стол лабораторный островной, серия Элит, модели: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.04.00; СЛО.04.01, в составе:	СЛО.01.00.Э; СЛО.01.01.Э; СЛО.02.00.Э; СЛО.02.01.Э; СЛО.04.00.Э; СЛО.04.01.Э	

Таблица 4.8 Комплектность изделия «Стол лабораторный островной, вариант исполнения: Стол лабораторный островной, серия Элит, модели: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный островной, серия Элит, модели*: СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02, в составе:	СЛО.03.00.Э; СЛО.03.01.Э; СЛО.03.02.Э	1
1.1	- Стол лабораторный островной – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛО.00.00 ПС.02	
1.3	Принадлежности (при необходимости): - Надстройка для стола, серия Элит – 1 шт., модели: СЛН.01.00 (мод.1); СЛН.01.01 (мод.1); СЛН.01.02 (мод.1); СЛН.02.00 (мод.1); СЛН.03.00 (мод.1); СЛН.03.01 (мод.1); СЛН.04.00 (мод.1); СЛН.05.00 (мод.1).	СЛН.01.00 (мод.1).Э; СЛН.01.01 (мод.1).Э; СЛН.01.02 (мод.1).Э; СЛН.02.00 (мод.1).Э; СЛН.03.00 (мод.1).Э; СЛН.03.01 (мод.1).Э; СЛН.04.00 (мод.1).Э; СЛН.05.00 (мод.1).Э	

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Срок службы

4.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

4.2. Условия транспортирования и хранения

4.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности до 100% при температуре плюс 25°С.

4.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

4.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

4.3. Утилизация

4.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

4.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

4.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

4.4. Гарантии изготовителя

4.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

4.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;
при нарушении правил эксплуатации и хранения;
при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол лабораторный островной: _____
серия модель

Принадлежность: Надстройка для стола: _____
серия модель

Дата изготовления: _____
месяц, число

Заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стол лабораторный островной: _____
серия модель

Принадлежность: Надстройка для стола: _____
серия модель

заводской номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-001-68690950-2012.

Дата упаковывания _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А – 3А1). ООО МК «АСК».

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Стол лабораторный островной: _____
серия модель

Принадлежность: Надстройка для стола: _____
серия модель

заводской № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

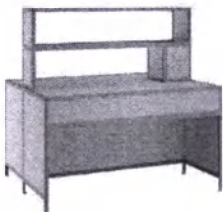
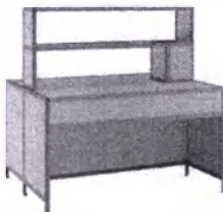
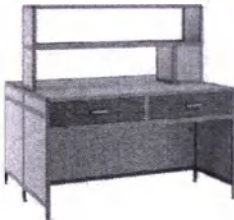
Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

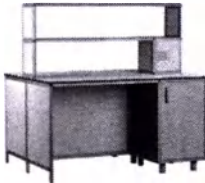
Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____
подпись

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (НАДСТРОЙКА ДЛЯ СТОЛА):

Таблица 5. Стол лабораторный островной, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: СЛО.01.00; СЛО.01.01; СЛО.02.00; СЛО.02.01; СЛО.03.00; СЛО.03.01; СЛО.03.02; СЛО.04.00.

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
СЛО.01.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛО.01.01	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛО.02.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
СЛО.02.01	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛО.03.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛО.03.01	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛО.03.02	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

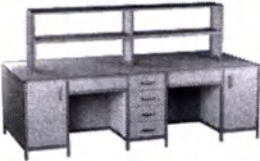
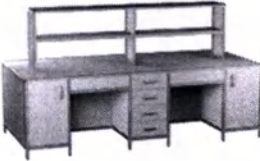
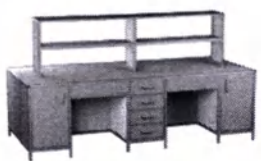
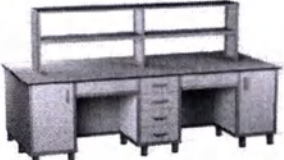
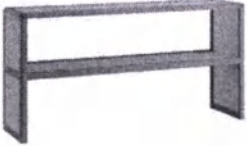
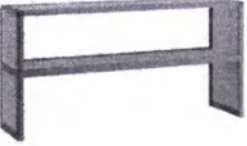
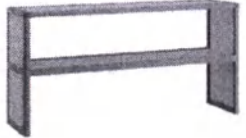
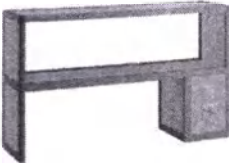
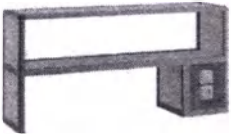
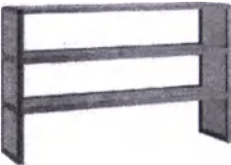
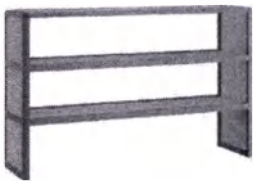
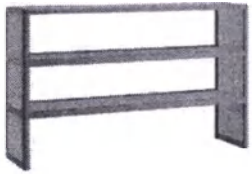
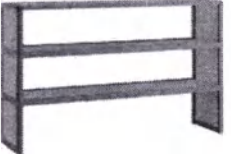
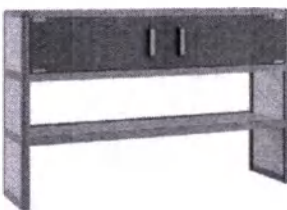
Серия Модель	Общий вид модель			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптимa	Элит
СЛО.04.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Таблица 6. Надстройка для стола, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптимa, Элит, модели: СЛН.01.00, СЛН.01.00 (мод.1.), СЛН.01.01, СЛН.01.01 (мод.1), СЛН.01.02, СЛН.01.02 (мод.1.), СЛН.02.00, СЛН.02.00 (мод.1.), СЛН.03.00, СЛН.03.00 (мод.1.), СЛН.03.01, СЛН.03.01 (мод.1.), СЛН.04.00, СЛН.04.00 (мод.1.), СЛН.05.00, СЛН.05.00 (мод.1.).

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптимa	Элит
СЛН.01.00 (мод.1)	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

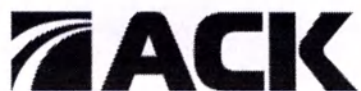
Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
СЛН.01.01 (мод.1)				
СЛН.01.02 (мод.1)	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛН.02.00 (мод.1)	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СЛН.03.00 (мод.1)	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Всего прошито и пронумеровано 169
(шестьдесят девять) листов

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.



ООО МК «АСК»



СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ВЕСОВ

Серии:	Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит
Модель:	СЛВ.01.00

Паспорт
СЛВ.00.00 ПС.02

г. Нижний Новгород

Версия 3.0

Оглавление

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	5
4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	6
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	7
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	7
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	7
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	8
Приложение 1.....	9

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Стол лабораторный для весов, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модель: СЛВ.01.00. Далее по тексту – Изделие, Стол.

Изделие выпускается по ТУ 9452-001-68690950-2011 в составе вариантов исполнения:

- I. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт»
- II. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»
- III. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Оптима»
- IV. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит»
- V. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ»

медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011»

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А-3А1)

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 **Назначение изделия:** изделие предназначено для размещения весов и приборов высокой точности, химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов при проведении клинических лабораторных исследований в клинико-диагностических лабораториях.

2.4 Потенциальный потребитель – медицинский работник.

2.5 Область применения - клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций.

2.6 Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.7 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

2.8 Основные технические характеристики изделий приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типораз- мерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
С Т О Л Ы ЛАБОРАТОРНЫЕ ДЛЯ ВЕСОВ							
1	Стол лабораторный для весов, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛВ.01.00	800÷1200	600÷800	750÷950**/ 820÷1020***	750÷950	50

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8); габаритные размеры для изделий одной модели, изготовленных в исполнениях серии Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, одинаковые, за исключением размеров, помеченных (**) или (***).

**-габаритная высота изделия серии Стандарт/Стандарт плюс/Оптима;

***- габаритная высота изделия серии Элит.

2.9 Масса изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг			
			Серия Стандарт	Серия Стандарт Плюс	Серия Оптима	Серия Элит
1	2	3	5	6	7	8
1	Стол лабораторный для весов	СЛВ.01.00	135	145	129	148

2.10 Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка изделий указана в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование изделия			Предельная равномерно-распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Серия	Модель	
1	2	3	4	5
1	Стол лабораторный для весов	Стандарт	СЛВ.01.00	- на столешницу – 70 - на платформу для весов - 200 - на дно ящика – 10
		Стандарт плюс		
		Оптима		
		Элит		

2.11 Стол устанавливается на неподвижные опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Опоры изделий имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4.1 Комплектность изделия «Стол лабораторный для весов, вариант исполнения: Стол лабораторный для весов, серия Стандарт, модель: СЛВ.01.00».

№ п/ п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.	Стол лабораторный для весов, серия Стандарт, модель: СЛВ.01.00, в составе:	СЛВ.01.00.С	1
1.1	- Стол лабораторный для весов – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛВ.00.00 ПС.02	

Таблица 4.2 Комплектность изделия «Стол лабораторный для весов, вариант исполнения: Стол лабораторный для весов, серия Стандарт плюс, модель: СЛВ.01.00».

№ п/ п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный для весов, серия Стандарт плюс, модель: СЛВ.01.00, в составе:	СЛВ.01.00.Сп	1
1. 1	- Стол лабораторный для весов – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛВ.00.00 ПС.02	

Таблица 4.3 Комплектность изделия «Стол лабораторный для весов, вариант исполнения: Стол лабораторный для весов, серия Оптима, модель: СЛВ.01.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный для весов, серия Оптима, модель: СЛВ.01.00, в составе:	СЛВ.01.00.О	1
1.1	- Стол лабораторный для весов – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛВ.00.00 ПС.02	

Таблица 4.4 Комплектность изделия «Стол лабораторный для весов, вариант исполнения: Стол лабораторный для весов, серия Элит, модель: СЛВ.01.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный для весов, серия Элит, модель СЛВ.01.00, в составе:	СЛВ.01.00.Э	1
1.1	- Стол лабораторный для весов – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛВ.00.00 ПС.02	

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Срок службы

4.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

4.2. Условия транспортирования и хранения

4.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности до 100% при температуре плюс 25°С.

4.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

4.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

4.3. Утилизация

4.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

4.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

4.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

4.4. Гарантии изготовителя

4.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

4.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол лабораторный для весов: _____
серия _____ модель _____

Дата изготовления: _____
месяц, число

Заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стол лабораторный для весов: _____
серия _____ модель _____

заводской номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-001-68690950-2012.

Дата упаковки _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А – 3А1). ООО МК «АСК».

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Стол лабораторный для весов: _____
серия модель

заводской № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

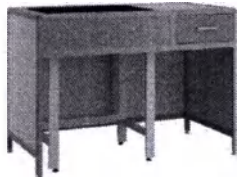
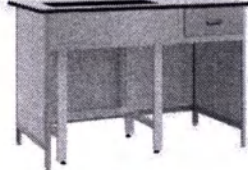
Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____
подпись

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ:

Таблица 5. Стол лабораторный для веосв, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модель: СЛВ.01.00.

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
СЛВ.01.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Всего прошито и пронумеровано 9
(реком) лист 06

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н. _____



25.12.2023

ООО МК «АСК»



СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С МОЙКОЙ

Серии:	Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит
Модели:	СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03

Паспорт
СЛМ.00.00 ПС.02

г. Нижний Новгород

Версия 3.0

Оглавление

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	5
4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	6
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	7
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	7
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	8
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	9
Приложение 1.....	10

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Стол лабораторный с мойкой, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03. Далее по тексту – Изделие, Стол.

Изделие выпускается по ТУ 9452-001-68690950-2011 в составе вариантов исполнения:

- I. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт»
- II. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»
- III. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий « Оптима»
- IV. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит»
- V. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ»

медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011»

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А-3А1)

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 **Назначение изделия:** изделие предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, а также для мытья лабораторной посуды и инструментов, утилизации отработанных реактивов в клинико-диагностических лабораториях.

2.4 Потенциальный потребитель – медицинский работник.

2.5 Область применения - клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций.

2.6 Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.7 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

2.8 Основные технические характеристики изделий приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типораз- мерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ С МОЙКОЙ							
1	Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	СЛМ.01.00	550+650	600+750	750+950**/ 820+1020***	750+950	5
		СЛМ.01.01	600+900	600+900	750+950**/ 820+1020***	750+950	5
		СЛМ.02.00	850+1000	600+750	750+950**/ 820+1020***	750+950	5
		СЛМ.02.01	850+1000	600+750	750+950**/ 820+1020***	750+950	5
		СЛМ.02.02	1200+1500	600+750	750+950**/ 820+1020***	750+950	5
		СЛМ.02.03	1200+1500	600+750	750+950**/ 820+1020***	750+950	5

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8); габаритные размеры для изделий одной модели, изготовленных в исполнениях серии Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, одинаковые, за исключением размеров, помеченных (**) или (***).

**-габаритная высота изделия серии Стандарт/Стандарт плюс/Оптима;

***- габаритная высота изделия серии Элит.

2.12 Масса изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг			
			Серия Стандарт	Серия Стандарт Плюс	Серия Оптима	Серия Элит
1	2	3	5	6	7	8
1	Стол лабораторный с мойкой	СЛМ.01.00	42	52	35	55
		СЛМ.01.01	71	83	67	89
		СЛМ.02.00	53	64	43	68
		СЛМ.02.01	74	84	61	89
		СЛМ.02.02	88	102	75	107
		СЛМ.02.03	112	125	96	131

2.13 Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка изделий указана в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование изделия			Предельная равномерно-распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Серия	Модель	
1	2	3	4	5
1	Стол лабораторный с мойкой	Стандарт	СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01;	- на столешницу – 70 - на полку и дно ящика – 10 - на мойку -10
		Стандарт плюс	СЛМ.02.02;	
		Оптима	СЛМ.02.03	
		Элит		

2.13 Стол устанавливается на неподвижные опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Опоры изделий имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4.1 Комплектность изделия «Стол лабораторный с мойкой, вариант исполнения: Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.	Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт, модели*: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.С; СЛМ.01.01.С; СЛМ.02.00.С; СЛМ.02.01.С; СЛМ.02.02.С; СЛМ.02.03.С	1
1.1	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.2 Комплектность изделия «Стол лабораторный с мойкой, вариант исполнения: Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт плюс, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный с мойкой, серия Стандарт плюс, модели*: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.Сп; СЛМ.01.01.Сп; СЛМ.02.00.Сп; СЛМ.02.01.Сп; СЛМ.02.02.Сп; СЛМ.02.03.Сп	1
1.1	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.3 Комплектность изделия «Стол лабораторный с мойкой, вариант исполнения: Стол лабораторный с мойкой, серия Оптима, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный с мойкой, серия Оптима, модели*: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.О; СЛМ.01.01.О; СЛМ.02.00.О; СЛМ.02.01.О; СЛМ.02.02.О; СЛМ.02.03.О	1
1.1	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.4 Комплектность изделия «Стол лабораторный с мойкой, вариант исполнения: Стол лабораторный с мойкой, серия Элит, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол лабораторный с мойкой, серия Элит, модели*: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03, в составе:	СЛМ.01.00.Э; СЛМ.01.01.Э; СЛМ.02.00.Э; СЛМ.02.01.Э; СЛМ.02.02.Э; СЛМ.02.03.Э	1
1.1	- Стол лабораторный с мойкой – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СЛМ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Срок службы

4.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

4.2. Условия транспортирования и хранения

4.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности до 100% при температуре плюс 25°С.

4.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

4.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

4.3. Утилизация

4.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

4.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

4.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

4.4. Гарантии изготовителя

4.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

4.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол лабораторный с мойкой: _____
серия модель

Дата изготовления: _____
месяц, число

Заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стол лабораторный с мойкой: _____
серия модель

заводской номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-001-68690950-2012.

Дата упаковывания _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу:
603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А – 3А1). ООО МК «АСК».

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Стол лабораторный с мойкой: _____
серия модель

заводской № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

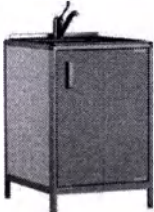
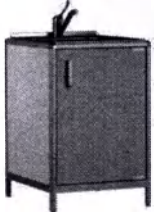
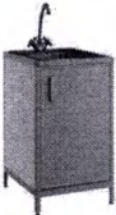
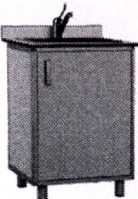
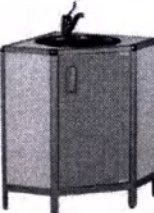
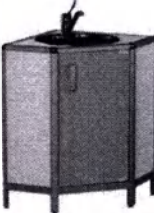
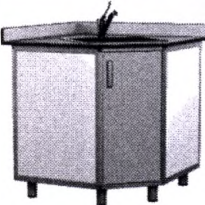
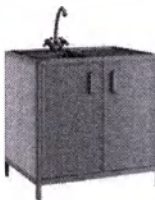
Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

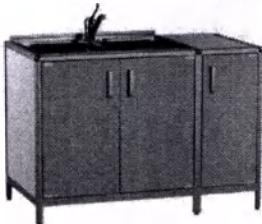
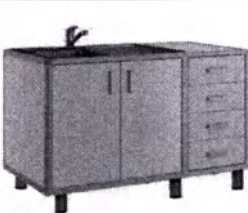
Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____
подпись

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ:

Таблица 5. Стол лабораторный с мойкой, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: СЛМ.01.00; СЛМ.01.01; СЛМ.02.00; СЛМ.02.01; СЛМ.02.02; СЛМ.02.03

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
СЛМ.01.00			☐ 	☐ 
СЛМ.01.01			☐ 	☐ 
СЛМ.02.00			☐ 	☐ 

СЛМ.02.01			☐ 	☐ 
СЛМ.02.02			☐ 	☐ 
СЛМ.02.03			☐ 	☐ 

Всего прошито и пронумеровано 11
(оформлять) листов

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.



ООО МК «АСК»



СТОЛ-ТУМБА ЛАБОРАТОРНЫЙ

Серии:	Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит
Модели:	СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09

Паспорт
СТ.00.00 ПС.02

г. Нижний Новгород

Версия 3.0

Оглавление

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	6
4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	7
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	9
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	9
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	9
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	10
Приложение 1.....	11

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Стол-тумба лабораторный, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09. Далее по тексту – Изделие, Стол-тумба.

Изделие выпускается по ТУ 9452-001-68690950-2011 в составе вариантов исполнения:

- I. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт»
- II. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»
- III. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Оптима»
- IV. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит»
- V. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ»

медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011»

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А-3А1)

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 **Назначение изделия:** изделие предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинико-диагностических лабораториях.

2.4 Потенциальный потребитель – медицинский работник.

2.5 Область применения - клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций.

2.6 Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.7 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

2.8 Основные технические характеристики изделия приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типораз- мерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
СТОЛЫ - ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ							
	Стол-тумба лабораторный, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптимал/ Элит	СТ.01.00	1300±1600	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.01.01	1300±1600	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.01.02	1300±1600	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.01.03	1300±1600	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.01.04	1300±1600	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.01.05	1300±1600	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.01.06	1300±1600	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.01.07	1300±1600	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТу.01.08	600±900	600±900	750±950	750±950	50
		СТ.02.00	800±1100	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.02.01	800±1100	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.02.02	800±1100	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.02.03	800±1100	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.02.04	800±1100	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.02.05	800±1100	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.02.06	800±1100	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.02.07	800±1100	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.02.08	800±1100	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50
		СТ.02.09	800±1100	500±800	750±950**/ 820±1020***	750±950	50

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8); габаритные размеры для изделий одной модели, изготовленных в исполнениях серии Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, одинаковые, за исключением размеров, помеченных (**) или (***).

**-габаритная высота изделия серии Стандарт/Стандарт плюс/Оптимал;

***- габаритная высота изделия серии Элит.

2.9 Масса изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг			
			Серия Стандарт	Серия Стандарт Плюс	Серия Оптима	Серия Элит
1	2	3	5	6	7	8
	Стол-тумба лабораторный	СТ.01.00	169	184	160	188
		СТ.01.01	142	157	138	161
		СТ.01.02	133	148	131	152
		СТ.01.03	175	190	192	194
		СТ.01.04	124	139	117	143
		СТ.01.05	133	148	130	152
		СТ.01.06	169	184	163	188
		СТ.01.07	180	195	170	199
		СТу.01.08	85	97	80	100
		СТ.02.00	135	147	128	151
		СТ.02.01	126	140	119	144
		СТ.02.02	103	115	98	119
		СТ.02.03	82	94	74	98
		СТ.02.04	95	107	86	111
		СТ.02.05	82	94	72	98
		СТ.02.06	98	110	97	114
		СТ.02.07	111	123	107	127
		СТ.02.08	105	117	82	121
		СТ.02.09	95	107	82	111

2.10 Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка изделий указана в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование изделия			Предельная рабочая равномерно- распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Серия	Модель	
1	2	3	4	5
1	Стол-тумба лабораторный	Стандарт	СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05;	- на столешницу – 100 - на полку и дно ящика – 10
		Стандарт плюс	СТ.01.06; СТ.01.07; СТу.01.08;	
		Оптима	СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05;	
		Элит	СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09	

2.11 Стол-тумба устанавливается на неподвижные опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Опоры изделий имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4.1 Комплектность изделия «Стол-тумба лабораторный, вариант исполнения: Стол-тумба лабораторный, серия Стандарт, модели: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.	Стол-тумба лабораторный, серия Стандарт, модели*: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09, в составе:	СТ.01.00.С; СТ.01.01.С; СТ.01.02.С; СТ.01.03.С; СТ.01.04.С; СТ.01.05.С; СТ.01.06.С; СТ.01.07.С; СТ.01.08.С; СТ.02.00.С; СТ.02.01.С; СТ.02.02.С; СТ.02.03.С; СТ.02.04.С; СТ.02.05.С; СТ.02.06.С; СТ.02.07.С; СТ.02.08.С; СТ.02.09.С	1
1.1	- Стол-тумба лабораторный – 1 шт.	СТ.02.03.С; СТ.02.04.С; СТ.02.05.С; СТ.02.06.С; СТ.02.07.С; СТ.02.08.С; СТ.02.09.С	
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СТ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.2 Комплектность изделия «Стол-тумба лабораторный, вариант исполнения: Стол-тумба лабораторный, серия Стандарт плюс, модели: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол-тумба лабораторный, серия Стандарт плюс, модели*: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09, в составе:	СТ.01.00.Сп; СТ.01.01.Сп; СТ.01.02.Сп; СТ.01.03.Сп; СТ.01.04.Сп; СТ.01.05.Сп; СТ.01.06.Сп; СТ.01.07.Сп; СТ.01.08.Сп; СТ.02.00.Сп; СТ.02.01.Сп; СТ.02.02.Сп; СТ.02.03.Сп; СТ.02.04.Сп; СТ.02.05.Сп; СТ.02.06.Сп; СТ.02.07.Сп; СТ.02.08.Сп; СТ.02.09.Сп	1
1.1	- Стол-тумба лабораторный – 1 шт.	СТ.02.03.Сп; СТ.02.04.Сп; СТ.02.05.Сп; СТ.02.06.Сп; СТ.02.07.Сп; СТ.02.08.Сп; СТ.02.09.Сп	
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СТ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.3 Комплектность изделия «Стол-тумба лабораторный, вариант исполнения: Стол-тумба лабораторный, серия Оптима, модели: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол-тумба лабораторный, серия Оптима, модели*: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09, в составе:	СТ.01.00.О; СТ.01.01.О; СТ.01.02.О; СТ.01.03.О; СТ.01.04.О; СТ.01.05.О; СТ.01.06.О; СТ.01.07.О; СТ.01.08.О; СТ.02.00.О; СТ.02.01.О; СТ.02.02.О; СТ.02.03.О; СТ.02.04.О; СТ.02.05.О; СТ.02.06.О; СТ.02.07.О; СТ.02.08.О; СТ.02.09.О	1
1.1	- Стол-тумба лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СТ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.4 Комплектность изделия «Стол-тумба лабораторный, вариант исполнения: Стол-тумба лабораторный, серия Элит, модели: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Стол-тумба лабораторный, серия Элит, модели*: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09, в составе:	СТ.01.00.Э; СТ.01.01.Э; СТ.01.02.Э; СТ.01.03.Э; СТ.01.04.Э; СТ.01.05.Э; СТ.01.06.Э; СТ.01.07.Э; СТ.01.08.Э; СТ.02.00.Э; СТ.02.01.Э; СТ.02.02.Э; СТ.02.03.Э; СТ.02.04.Э; СТ.02.05.Э; СТ.02.06.Э; СТ.02.07.Э; СТ.02.08.Э; СТ.02.09.Э	1
1.1	- Стол-тумба лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СТ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Срок службы

4.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

4.2. Условия транспортирования и хранения

4.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности до 100% при температуре плюс 25°С.

4.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

4.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

4.3. Утилизация

4.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

4.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

4.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

4.4. Гарантии изготовителя

4.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

4.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол-тумба лабораторный: _____
серия _____ модель _____

Дата изготовления: _____
месяц, число

Заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стол-тумба лабораторный: _____
серия _____ модель _____

заводской номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-001-68690950-2012.

Дата упаковывания _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А – 3А1). ООО МК «АСК».

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Стол-тумба лабораторный: _____
серия модель

заводской № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

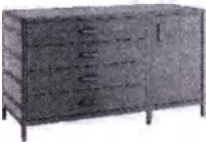
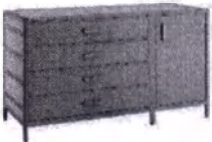
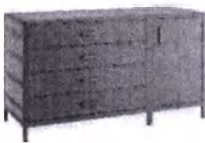
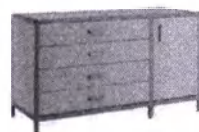
Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

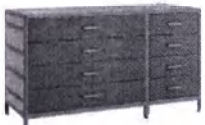
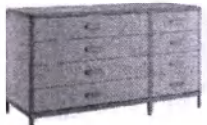
Сведения о ремонте: _____

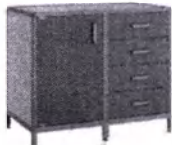
Исполнитель _____
подпись

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ:

Таблица 5. Стол-тумба лабораторный, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: СТ.01.00; СТ.01.01; СТ.01.02; СТ.01.03; СТ.01.04; СТ.01.05; СТ.01.06; СТ.01.07; СТ.01.08; СТ.02.00; СТ.02.01; СТ.02.02; СТ.02.03; СТ.02.04; СТ.02.05; СТ.02.06; СТ.02.07; СТ.02.08; СТ.02.09.

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
СТ.01.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СТ.01.01	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СТ.01.02	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СТ.01.03	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
СТ.01.04	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СТ.01.05	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СТ.01.06	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СТ.01.07	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
СТy.01.08	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

CT.02.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
CT.02.01	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
CT.02.02	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
CT.02.03	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
CT.02.04	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

CT.02.05	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
CT.02.06	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
CT.02.07	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
CT.02.08	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
CT.02.09	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Всего прошито и пронумеровано 14
(детрифицировать) лист 6

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.



ООО МК «АСК»



СТОЛИК ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОДКАТНОЙ

Модели:	СИЛ.01.00; СИЛ.01.01
----------------	-----------------------------

**Паспорт
СИЛ.00.00 ПС.02**

г. Нижний Новгород

Оглавление

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	5
4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	5
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	6
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	6
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	7
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	8
Приложение 1.....	9

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Столик лабораторный подкатной, модели: СИЛ.01.00; СИЛ.01.01. Далее по тексту – Изделие, Столик.

Изделие выпускается по ТУ 9452-001-68690950-2011 в составе вариантов исполнения:

- I. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт»
- II. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»
- III. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Оптима»
- IV. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит»
- V. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ»

медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011»

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А-3А1)

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 **Назначение изделия:** изделие предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, исследуемого биоматериала, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинико-диагностических лабораториях.

2.4 Потенциальный потребитель – медицинский работник.

2.5 Область применения - клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций.

2.6 Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.7 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

2.8 Основные технические характеристики изделий приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типораз- мерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
СТОЛИКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОДКАТНЫЕ							
1	Столик лабораторный подкатной	СИЛ.01.00	550÷750	400÷500	750÷950	750÷950	25
		СИЛ.01.01	550÷750	400÷500	750÷950	750÷950	25

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8)

2.9 Масса изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг
1	2	3	4
1	Столик лабораторный подкатной	СИЛ.01.00	24
		СИЛ.01.01	28

2.10 Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка изделий указана в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование изделия		Предельная равномерно-распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Модель	
1	2	3	4
1	Столик лабораторный подкатной	СИЛ.01.00; СИЛ.01.01	- на полку и дно ящика – 5

2.11 Столик устанавливается на колесные опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Диаметр колес 50±2 мм или 75±2.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4.1 Комплектность изделия «Столик лабораторный подкатной, вариант исполнения: Столик лабораторный подкатной, модель: СИЛ.01.00; СИЛ.01.01».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.	Столик лабораторный подкатной, модели*: СИЛ.01.00; СИЛ.01.01 – 1 шт., в составе:	СИЛ.01.00; СИЛ.01.01	1
1.1	- Столик лабораторный подкатной – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СИЛ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Срок службы

4.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

4.2. Условия транспортирования и хранения

4.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности до 100% при температуре плюс 25°С.

4.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

4.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

4.3. Утилизация

4.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

4.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

4.3.2 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

4.4. Гарантии изготовителя

4.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

4.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик лабораторный подкатной: _____
серия модель

Дата изготовления: _____
месяц, число

Заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Столик лабораторный подкатной: _____
серия модель

заводской номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-001-68690950-2012.

Дата упаковки _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу:
603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А – 3А1). ООО МК «АСК».

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Столик лабораторный подкатной: _____
серия модель

заводской № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____
подпись

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ:

Таблица 5. Столик лабораторный подкатной, модели: СИЛ.01.00; СИЛ.01.01

Модель	Общий вид модели
СИЛ.01.00	
СИЛ.01.01	

Всего прошито и пронумеровано 9
(зевать) лист 06

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.

25.12.2013



ООО МК «АСК»



ТУМБА ЛАБОРАТОРНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ

Серии:	Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит
Модели:	ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00

Паспорт
ТЛс.00.00 ПС.02

г. Нижний Новгород

Версия 3.0

Оглавление

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	5
4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	7
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	8
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	9
Приложение 1	10

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Тумба лабораторная стационарная, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00. Далее по тексту – Изделие, Тумба.

Изделие выпускается по ТУ 9452-001-68690950-2011 в составе вариантов исполнения:

- I. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт»
- II. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»
- III. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Оптима»
- IV. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит»
- V. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ»

медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011»

Регистрационное удостоверение _____

2.2 Сведения о производителе:

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А-3А1)

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 **Назначение изделия:** изделие предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинико-диагностических лабораториях.

2.4 Потенциальный потребитель – медицинский работник.

2.5 Область применения - клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций.

2.6 Показания для применения медицинского изделия: применять согласно назначению.

2.7 Противопоказания к применению медицинского изделия: противопоказания не выявлены. Не применять не по назначению.

2.8 Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия: не выявлены.

2.9 Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.10 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

2.11 Основные технические характеристики изделия приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Типораз- мерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм	
1	2	3	4	5	6	7
ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ						
1	Тумба лабораторная стационарная, серия Стандарт/Стандарт плюс/Оптима/Элит	ТЛс.01.00	400+600	400+600	750+950	25
		ТЛс.02.00	400+600	400+600	750+950	25
		ТЛс.03.00	400+600	400+600	750+950	25
		ТЛс.04.00	400+600	400+600	750+950	25
		ТЛс.05.00	400+600	400+600	750+950	25
		ТЛс.06.00	400+600	400+600	750+950	25
		ТЛс.07.00	400+600	400+600	750+950	25
		ТЛс.08.00	400+600	400+600	750+950	25
		ТЛс.09.00	400+600	400+600	750+950	25

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8); габаритные размеры для изделий одной модели, изготовленных в исполнениях серии Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, одинаковые, за исключением размеров, помеченных (**) или (***)

**-габаритная высота изделия серии Стандарт/Стандарт плюс/Оптима;

***- габаритная высота изделия серии Элит.

2.12 Масса изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг			
			Серия Стандарт	Серия Стандарт Плюс	Серия Оптима	Серия Элит
1	2	3	5	6	7	8
1	Тумба лабораторная стационарная	ТЛс.01.00	41	46	39	48
		ТЛс.02.00	41	46	39	48
		ТЛс.03.00	69	74	50	76
		ТЛс.04.00	74	79	57	81
		ТЛс.05.00	51	56	41	58
		ТЛс.06.00	62	67	46	69
		ТЛс.07.00	58	63	48	65
		ТЛс.08.00	53	58	39	60
		ТЛс.09.00	46	51	44	53

2.13 Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка изделий указана в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование изделия			Предельная рабочая равномерно- распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Серия	Модель	
1	2	3	4	5
1	Тумба лабораторная стационарная	Стандарт	ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00	- на столешницу – 30 - на полку и дно ящика – 10
		Стандарт плюс		
		Оптима		
		Элит		

2.13 Тумба устанавливается на неподвижные опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Опоры изделий имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4.1 Комплектность изделия «Тумба лабораторная стационарная, вариант исполнения: Тумба лабораторная стационарная, серия Стандарт, модели: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.	Тумба лабораторная стационарная, серия Стандарт, модели*: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00, в составе:	ТЛс.01.00.С; ТЛс.02.00.С; ТЛс.03.00.С; ТЛс.04.00.С; ТЛс.05.00.С; ТЛс.06.00.С; ТЛс.07.00.С; ТЛс.08.00.С; ТЛс.09.00.С	1
1.1	- Тумба лабораторная стационарная – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ТЛс.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.2 Комплектность изделия «Тумба лабораторная стационарная, вариант исполнения: Тумба лабораторная стационарная, серия Стандарт плюс, модели: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Тумба лабораторная стационарная, серия Стандарт, модели*: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00, в составе:	ТЛс.01.00.С; ТЛс.02.00.С; ТЛс.03.00.С; ТЛс.04.00.С; ТЛс.05.00.С; ТЛс.06.00.С; ТЛс.07.00.С; ТЛс.08.00.С; ТЛс.09.00.С	1
1.1	- Тумба лабораторная стационарная – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ТЛс.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.3 Комплектность изделия «Тумба лабораторная стационарная, вариант исполнения: Тумба лабораторная стационарная, серия Оптима, модели: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Тумба лабораторная стационарная, серия Оптима, модели*: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00, в составе:	ТЛс.01.00.О; ТЛс.02.00.О; ТЛс.03.00.О; ТЛс.04.00.О; ТЛс.05.00.О; ТЛс.06.00.О; ТЛс.07.00.О; ТЛс.08.00.О; ТЛс.09.00.О	1
1.1	- Тумба лабораторная стационарная – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ТЛс.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.4 Комплектность изделия «Тумба лабораторная стационарная, вариант исполнения: Тумба лабораторная стационарная, серия Элит, модели: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Тумба лабораторная стационарная, серия Элит, модели*: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00, в составе:	ТЛс.01.00.Э; ТЛс.02.00.Э; ТЛс.03.00.Э; ТЛс.04.00.Э; ТЛс.05.00.Э; ТЛс.06.00.Э; ТЛс.07.00.Э; ТЛс.08.00.Э; ТЛс.09.00.Э	1
1.1	- Тумба лабораторная стационарная – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ТЛс.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Срок службы

4.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

4.2. Условия транспортирования и хранения

4.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности до 100% при температуре плюс 25°С.

4.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

4.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

4.3. Утилизация

4.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

4.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

4.3.2 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

4.4. Гарантии изготовителя

4.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

4.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба лабораторная стационарная: _____
серия _____ модель _____

Дата изготовления: _____
месяц, число

Заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Тумба лабораторная стационарная: _____
серия _____ модель _____

заводской номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-001-68690950-2012.

Дата упаковывания _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу:
603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А – 3А1). ООО МК «АСК».

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Тумба лабораторная стационарная: _____
серия _____ модель _____

заводской № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

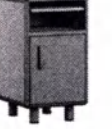
Исполнитель _____
подпись

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ:

Таблица 5. Тумба лабораторная стационарная, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: ТЛс.01.00; ТЛс.02.00; ТЛс.03.00; ТЛс.04.00; ТЛс.05.00; ТЛс.06.00; ТЛс.07.00; ТЛс.08.00; ТЛс.09.00.

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
ТЛс.01.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ТЛс.02.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ТЛс.03.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптимa	Элит
ТЛс.04.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ТЛс.05.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ТЛс.06.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ТЛс.07.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптимa	Элит
ТЛс.08.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ТЛс.09.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Всего прошито и пронумеровано 12
(декаданы) лист 06

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.



ООО МК «АСК»



ТУМБА ЛАБОРАТОРНАЯ ПОДКАТНАЯ

Серии:	Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит			
Модели:	ТЛп.01.00;	ТЛп.02.00;	ТЛп.03.00;	ТЛп.04.00;
	ТЛп.05.00;	ТЛп.06.00;	ТЛп.07.00;	ТЛп.08.00;
	ТЛп.09.00			

Паспорт
ТЛп.00.00 ПС.02

г. Нижний Новгород

Оглавление

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	5
4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	7
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	7
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	8
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	9
Приложение 1	10

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Тумба лабораторная подкатная, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00. Далее по тексту – Изделие, Тумба.

Изделие выпускается по ТУ 9452-001-68690950-2011 в составе вариантов исполнения:

- I. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт»
- II. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»
- III. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Оптима»
- IV. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит»
- V. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ»

медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011»

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А-3А1)

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 **Назначение изделия:** изделие предназначено для проведения клинических лабораторных исследований, размещения химических реактивов, лабораторной посуды, инструментов, материалов, оборудования и техники для исследований в клинико-диагностических лабораториях.

2.4 Потенциальный потребитель – медицинский работник.

2.5 Область применения - клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций.

2.6 Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.7 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

2.8 Основные технические характеристики изделия приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Типораз- мерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм	
1	2	3	4	5	6	7
ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОДКАТНЫЕ						
1	Тумба лабораторная подкатная, серия Стандарт/Стандарт плюс/Оптима/ Элит	ТЛп.01.00	400÷600	400÷600	750÷950	25
		ТЛп.02.00	400÷600	400÷600	750÷950	25
		ТЛп.03.00	400÷600	400÷600	750÷950	25
		ТЛп.04.00	400÷600	400÷600	750÷950	25
		ТЛп.05.00	400÷600	400÷600	750÷950	25
		ТЛп.06.00	400÷600	400÷600	750÷950	25
		ТЛп.07.00	400÷600	400÷600	750÷950	25
		ТЛп.08.00	400÷600	400÷600	750÷950	25
		ТЛп.09.00	400÷600	400÷600	750÷950	25

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8); габаритные размеры для изделий одной модели, изготовленных в исполнениях серии Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, одинаковые, за исключением размеров, помеченных (**) или (**).

**-габаритная высота изделия серии Стандарт/Стандарт плюс/Оптима;

***- габаритная высота изделия серии Элит.

2.9 Масса изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг			
			Серия Стандарт	Серия Стандарт Плюс	Серия Оптима	Серия Элит
1	2	3	5	6	7	8
1	Тумба лабораторная подкатная	ТЛп.01.00	44	49	39	51
		ТЛп.02.00	44	49	41	51
		ТЛп.03.00	66	71	50	73
		ТЛп.04.00	64	69	57	71
		ТЛп.05.00	51	56	41	58
		ТЛп.06.00	62	67	46	69
		ТЛп.07.00	60	65	48	67
		ТЛп.08.00	53	58	39	60
		ТЛп.09.00	48	53	44	55

2.10 Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка изделий указана в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование изделия			Предельная рабочая равномерно- распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Серия	Модель	
1	2	3	4	5
1	Тумба лабораторная подкатная	Стандарт	ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00	- на столешницу – 30 - на полку и дно ящика – 10
		Стандарт плюс		
		Оптима		
		Элит		

2.11 Тумба устанавливается на колесные опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Диаметр колес 50 ± 2 мм или 75 ± 2 .

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4.1 Комплектность изделия «Тумба лабораторная подкатная, вариант исполнения: Тумба лабораторная подкатная, серия Стандарт, модели: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.	Тумба лабораторная подкатная, серия Стандарт, модели*: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00, в составе:	ТЛп.01.00.С; ТЛп.02.00.С; ТЛп.03.00.С; ТЛп.04.00.С; ТЛп.05.00.С; ТЛп.06.00.С; ТЛп.07.00.С; ТЛп.08.00.С; ТЛп.09.00.С	1
1.1	- Тумба лабораторная подкатная – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ТЛп.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.2 Комплектность изделия «Тумба лабораторная подкатная, вариант исполнения: Тумба лабораторная подкатная, серия Стандарт плюс, модели: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Тумба лабораторная подкатная, серия Стандарт плюс, модели*: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00, в составе:	ТЛп.01.00.Сп; ТЛп.02.00.Сп; ТЛп.03.00.Сп; ТЛп.04.00.Сп; ТЛп.05.00.Сп; ТЛп.06.00.Сп; ТЛп.07.00.Сп; ТЛп.08.00.Сп; ТЛп.09.00.Сп	1
1.1	- Тумба лабораторная подкатная – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.		

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.3 Комплектность изделия «Тумба лабораторная подкатная, вариант исполнения: Тумба лабораторная подкатная, серия Оптима, модели: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Тумба лабораторная подкатная, серия Оптима, модели*: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00, в составе:	ТЛп.01.00.О; ТЛп.02.00.О; ТЛп.03.00.О; ТЛп.04.00.О; ТЛп.05.00.О; ТЛп.06.00.О; ТЛп.07.00.О; ТЛп.08.00.О; ТЛп.09.00.О	1
1.1	- Тумба лабораторная подкатная – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ТЛп.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.4 Комплектность изделия «Тумба лабораторная подкатная, вариант исполнения: Тумба лабораторная подкатная, серия Элит, модели: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Тумба лабораторная подкатная, серия Элит, модели*: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00, в составе:	ТЛп.01.00.Э; ТЛп.02.00.Э; ТЛп.03.00.Э; ТЛп.04.00.Э; ТЛп.05.00.Э; ТЛп.06.00.Э; ТЛп.07.00.Э; ТЛп.08.00.Э; ТЛп.09.00.Э	1
1.1	- Тумба лабораторная подкатная – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ТЛп.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Срок службы

4.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

4.2. Условия транспортирования и хранения

4.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности до 100% при температуре плюс 25°С.

4.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

4.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

4.3. Утилизация

4.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

4.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

4.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

4.4. Гарантии изготовителя

4.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

4.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба лабораторная подкатная: _____
серия _____ модель _____

Дата изготовления: _____
месяц, число

Заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Тумба лабораторная подкатная: _____
серия _____ модель _____

заводской номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-001-68690950-2012.

Дата упаковки _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу:
603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А – 3А1). ООО МК «АСК».

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Тумба лабораторная подкатная: _____
серия _____ модель _____

заводской № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

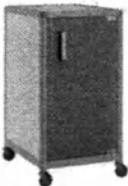
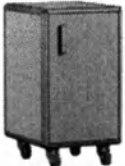
Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

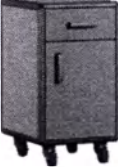
Сведения о ремонте: _____

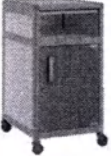
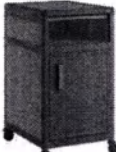
Исполнитель _____
подпись

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ:

Таблица 5. Тумба лабораторная подкатная, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: ТЛп.01.00; ТЛп.02.00; ТЛп.03.00; ТЛп.04.00; ТЛп.05.00; ТЛп.06.00; ТЛп.07.00; ТЛп.08.00; ТЛп.09.00.

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
ТЛп.01.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ТЛп.02.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ТЛп.03.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
ТЛп.04.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ТЛп.05.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ТЛп.06.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ТЛп.07.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия Исполнение	Общий вид исполнения			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
ТЛп.08.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ТЛп.09.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Всего прошито и пронумеровано 12
(всего) лист 8

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.



ООО МК «АСК»



ШКАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ

Серия:	Стандарт плюс	Серии:	Оптима, Элит
Модели:	ШВ.01.00, ШВ.01.01, ШВ.02.00, ШВ.02.01	Модели:	ШВ.01.00А, ШВ.01.01А, ШВ.02.00А, ШВ.02.01А

Паспорт
ШЛ.00.00 ПС.02

г. Нижний Новгород

Версия 3.0

Оглавление

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	6
4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	7
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	8
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	9
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	9
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	10
Приложение 1.....	11

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Шкаф лабораторный вытяжной, серия: Стандарт, модели: ШВ.01.00; ШВ.01.01; ШВ.02.00; ШВ.02.01; серии: Оптима, Элит, модели: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А. Далее по тексту – Изделие, Шкаф.

Изделие выпускается по ТУ 9452-001-68690950-2011 в составе вариантов исполнения:

II. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»

III. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Оптима»

IV. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит»

V. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ»

медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011»

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А-3А1)

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 **Назначение изделия:** изделие предназначено для хранения сухих предметов и нетоксичных химических веществ в клинико-диагностических лабораториях.

2.4 Потенциальный потребитель – медицинский работник.

2.5 Область применения - клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций.

2.6 Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.7 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

2.8 Основные технические характеристики изделия приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Высота поверхности столешницы, (±4) мм	Типораз- мерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм		
1	2	3	4	5	6	7	8
ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ							
1	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Стандарт плюс	ШВ.01.00	1000÷1200	600÷800	2000÷2200	880	50
		ШВ.01.01	1000÷1200	600÷800	2000÷2200	880	50
	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Стандарт плюс	ШВ.02.00	1000÷1200	600÷800	2000÷2200	880	50
		ШВ.02.01	1000÷1200	600÷800	2000÷2200	880	50
	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Оптима/Элит	ШВ.01.00А	1000÷1500	700÷800	2000÷2200	для серии Оптима: 875; для серии Элит: 850	50
		ШВ.01.01А	1000÷1500	700÷800	2000÷2200		50
	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Оптима/Элит	ШВ.02.00А	1000÷1500	700÷800	2000÷2200		50
		ШВ.02.01А	1000÷1500	700÷800	2000÷2200		50

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8); габаритные размеры для изделий одной модели, изготовленных в исполнениях серии Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, одинаковые, за исключением размеров, помеченных (**) или (***).

**-габаритная высота изделия серии Стандарт/Стандарт плюс/Оптима;

***- габаритная высота изделия серии Элит.

2.9 Масса изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг		
			Серия Стандарт Плюс	Серия Оптима	Серия Элит
1	2	3	6	7	8
	Шкаф лабораторный вытяжной	ШВ.01.00	178	-	-
		ШВ.01.01	185	-	-
		ШВ.02.00	185	-	-
		ШВ.02.01	188	-	-
		ШВ.01.00А	-	157	227
		ШВ.01.01А	-	157	227
		ШВ.02.00А	-	185	221
		ШВ.02.01А	-	182	252

2.10 Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка изделий указана в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование изделия			Предельная равномерно- распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Серия	Модель	
1	2	3	4	5
1	Шкаф лабораторный вытяжной	Стандарт плюс	ШВ.01.00; ШВ.01.01; ШВ.02.00; ШВ.02.01	- на столешницу – 20 - на полку – 10
		Оптимa	ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А	
		Элит		

2.11. Шкаф лабораторный вытяжной снабжен светодиодным светильником типа PLED-T5i PL, номинальной потребляемой мощностью 8-10 Вт, электропитание: 230 В ($\pm 10\%$), (50 ± 1) Гц. Освещенность, создаваемая светильником в центре поверхности рабочей зоны вытяжного шкафа- не менее 300 лк.

2.12. На шкафах лабораторных вытяжных всех исполнений и моделей установлены розетки с заземляющим контактом и защитной крышкой для подключения потребителей электропитания от внешней однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230 В.

Шкафы лабораторные вытяжные серии Стандарт плюс, серии Оптима имеют по 1 розетке.

Шкафы лабораторные вытяжные серии Элит оснащены 2 розетками.

На шкафах лабораторных вытяжных серии Элит установлен автоматический выключатель дифференциального тока типа АВДТ32 с номинальным током 16 А.

2.13 Номинальная потребляемая мощность шкафов лабораторных вытяжных серии Стандарт плюс и серии Оптима (без учета электропотребителей, подсоединяемых к розетке шкафа) - в диапазоне 21-30 Вт.

Максимальная номинальная потребляемая мощность шкафов лабораторных вытяжных серии Стандарт плюс и серии Оптима с учетом электропотребителей, подсоединяемых к розетке шкафа - не более 2,25 кВт.

Номинальная потребляемая мощность шкафов лабораторных вытяжных серии Элит (без учета электропотребителей, подсоединяемых к розеткам шкафа) - в диапазоне 85 Вт ($\pm 10\%$).

Максимальная номинальная потребляемая мощность шкафов лабораторных вытяжных серии Элит с учетом электропотребителей, подсоединяемых к розетке шкафа - не более 3,3 кВт.

2.14 Розетка шкафов лабораторных вытяжных всех моделей серии Стандарт плюс и серии Оптима работоспособна при подключении электропотребителя с максимальной номинальной потребляемой мощностью не более 2,2 кВт.

Розетки шкафов лабораторных вытяжных всех моделей серии Элит работоспособны при подключении электропотребителей с суммарной максимальной номинальной потребляемой мощностью не более 3,2 кВт.

2.15. Вытяжное устройство шкафов лабораторных вытяжных имеет воздуховод (патрубок вентилятора) для присоединения к централизованной вентиляционной системе. Присоединительный (наружный) диаметр патрубка вентилятора равен значению, указанному в таблице 4.

Вытяжное устройство шкафов лабораторных вытяжных имеет вентилятор, отвечающий требованиям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4. Основные характеристики вытяжного устройства

Наименование характеристики вентилятора	Шкафы лабораторные вытяжные		
	серия Стандарт плюс, модели: ШВ.01.00; ШВ.01.01; ШВ.02.00; ШВ.02.01	серия Оптима, модели: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А	серия Элит, модели: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А
Присоединительный (наружный) диаметр патрубка вентилятора	(125±1) мм		(125±1) мм
Номинальная потребляемая мощность вентилятора, Вт	16±2		70±8
Номинальная производительность по объему перемещаемого воздуха, м³/ч	184±5		400±10
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБА	Не более 40		Не более 40

2.16. Характеристики кабеля питания шкафов лабораторных вытяжных соответствуют указанным в таблице 5.

Таблица 5. Характеристики кабеля питания шкафов лабораторных вытяжных.

Параметр	Значение
Тип провода кабеля питания	3х1,5 мм², с двойной изоляцией или 3х2,5 мм², с двойной изоляцией
Длина кабеля (с вилкой), мм	2000±200
Тип вилки	Евровилка, 230 В, 50Гц

Кабель питания шкафов лабораторных вытяжных должен быть несъемным.

2.17 Шкаф устанавливается на неподвижные опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Опоры изделий имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 6.1 Комплектность изделия «Шкаф лабораторный вытяжной, вариант исполнения: Шкаф лабораторный вытяжной, серия Стандарт плюс, модели: ШВ.01.00; ШВ.01.01; ШВ.02.00; ШВ.02.01».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Стандарт плюс, модели*: ШВ.01.00; ШВ.01.01; ШВ.02.00; ШВ.02.01, в составе:	ШВ.01.00.Сп; ШВ.01.01.Сп; ШВ.02.00.Сп; ШВ.02.01.Сп	1
1.1	- Шкаф лабораторный вытяжной – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ШВ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 6.2 Комплектность изделия «Шкаф лабораторный вытяжной, вариант исполнения: Шкаф лабораторный вытяжной, серия Оптима, модели: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Оптима, модели*: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А, в составе:	ШВ.01.00А.О; ШВ.01.01А.О; ШВ.02.00А.О; ШВ.02.01А.О	1
1.1	- Шкаф лабораторный вытяжной – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ШВ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 6.3 Комплектность изделия «Шкаф лабораторный вытяжной, вариант исполнения: Шкаф лабораторный вытяжной, серия Элит, модели: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Шкаф лабораторный вытяжной, серия Элит, модели*: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А, в составе:	ШВ.01.00А.Э; ШВ.01.01А.Э; ШВ.02.00А.Э; ШВ.02.01А.Э	1
1.1	- Шкаф лабораторный вытяжной – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ШВ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Срок службы

4.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

4.2. Условия транспортирования и хранения

4.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности до 100% при температуре плюс 25°С.

4.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха

существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

4.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

4.3. Утилизация

4.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

4.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

4.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

4.4. Гарантии изготовителя

4.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

4.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф лабораторный вытяжной: _____
серия _____ модель _____

Дата изготовления: _____
месяц, число

Заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф лабораторный вытяжной: _____
серия _____ модель _____

заводской номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям
ТУ 9452-001-68690950-2012.

Дата упаковывания _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу:
603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А – 3А1). ООО МК «АСК».

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Шкаф лабораторный вытяжной: _____
серия _____ модель _____

заводской № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

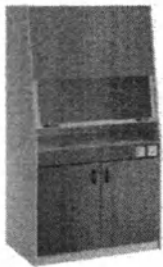
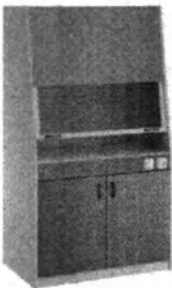
Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

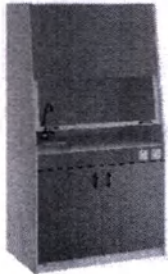
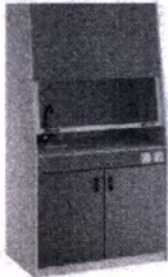
Сведения о ремонте: _____

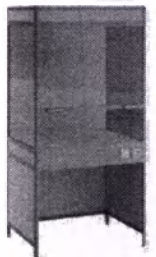
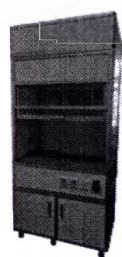
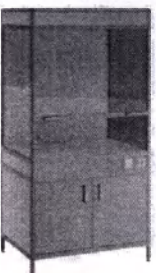
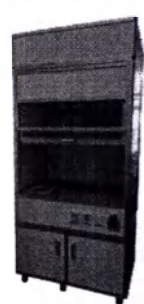
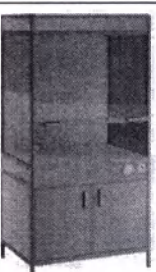
Исполнитель _____
подпись

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ:

Таблица 7. Шкаф лабораторный вытяжной,
 серии: Стандарт плюс, модели: ШВ.01.00; ШВ.01.01; ШВ.02.00; ШВ.02.01;
 серии: Оптима, Элит, модели: ШВ.01.00А; ШВ.01.01А; ШВ.02.00А; ШВ.02.01А

Серия Модель	Общий вид модели		
	Стандарт плюс	Оптима	Элит
ШВ.01.00	☐ 	-	-
ШВ.01.01	☐ 	-	-

Серия Модель	Общий вид модели		
	Стандарт плюс	Оптима	Элит
ШВ.02.00	☐ 	-	-
ШВ.02.01	☐ 	-	-
ШВ.01.00А	-	☐ 	☐ 

Серия Модель	Общий вид модели		
	Стандарт плюс	Оптима	Элит
ШВ.01.01А	-	☐ 	☐ 
ШВ.02.00А	-	☐ 	☐ 
ШВ.02.01А	-	☐ 	☐ 

Всего прошито и пронумеровано 13
(Тринадцатый) лист 86

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.



ООО МК «АСК»



ШКАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ

Серии:	Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит			
Модели:	ШЛ.01.00;	ШЛ.01.01;	ШЛ.01.02;	ШЛ.01.03;
	ШЛ.01.04;	ШЛ.01.05;	ШЛ.01.06;	ШЛ.01.07;
	ШЛ.01.08;	ШЛ.02.00;	ШЛ.02.01;	ШЛ.02.02;
	ШЛ.02.03;	ШЛ.02.04;	ШЛ.02.05;	ШЛ.02.06;
	ШЛ.02.07;	ШЛ.02.08		

Паспорт
ШЛ.00.00 ПС.02

г. Нижний Новгород

Версия 3.0

Оглавление

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	5
4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	7
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	8
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	8
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	8
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	9
Приложение 1.....	10

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Шкаф лабораторный, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08. Далее по тексту – Изделие, Шкаф.

Изделие выпускается по ТУ 9452-001-68690950-2011 в составе вариантов исполнения:

- I. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт»
- II. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»
- III. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Оптима»
- IV. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит»
- V. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ»

медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011»

Регистрационное удостоверение _____

2.2 Сведения о производителе:

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А-3А1)

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 **Назначение изделия:** изделие предназначено для хранения сухих предметов и нетоксичных химических веществ в клинико-диагностических лабораториях.

2.4 Потенциальный потребитель – медицинский работник.

2.5 Область применения - клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций.

2.6 Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.7 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

2.8 Основные технические характеристики изделия приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Типоразмерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм	
1	2	3	4	5	6	7
ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ						
1	Шкаф лабораторный, серия Стандарт/Стандарт плюс/Оптимал/ Элит	ШЛ.01.00	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.01	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.02	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.03	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.04	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.05	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.06	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.07	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.08	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.00	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.01	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.02	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.03	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.04	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.05	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.06	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.07	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.08	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8); габаритные размеры для изделий одной модели, изготовленных в исполнениях серии Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, одинаковые, за исключением размеров, помеченных (**) или (***).

** -габаритная высота изделия серии Стандарт/Стандарт плюс/Оптимал;

*** - габаритная высота изделия серии Элит.

2.9 Масса изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг			
			Серия Стандарт	Серия Стандарт Плюс	Серия Оптимал	Серия Элит
1	2	3	5	6	7	8
	Шкаф лабораторный	ШЛ.01.00	83	103	72	109
		ШЛ.01.01	68	88	64	94
		ШЛ.01.02	53	73	49	79
		ШЛ.01.03	83	103	76	109
		ШЛ.01.04	53	73	49	79
		ШЛ.01.05	106	126	99	132
		ШЛ.01.06	93	113	85	119
		ШЛ.01.07	70	90	64	96
		ШЛ.01.08	83	103	74	109
		ШЛ.02.00	123	157	107	164
		ШЛ.02.01	116	140	93	147
		ШЛ.02.02	112	136	90	144
		ШЛ.02.03	117	141	114	148
		ШЛ.02.04	112	138	109	145
		ШЛ.02.05	158	182	149	189
		ШЛ.02.06	155	179	156	186
		ШЛ.02.07	95	119	91	126
		ШЛ.02.08	125	149	105	156

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Типоразмерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм	
1	2	3	4	5	6	7
ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ						
1	Шкаф лабораторный, серия Стандарт/Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	ШЛ.01.00	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.01	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.02	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.03	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.04	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.05	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.06	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.07	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.01.08	400÷600	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.00	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.01	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.02	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.03	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.04	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.05	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.06	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.07	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25
		ШЛ.02.08	800÷1000	350÷600	1700÷2000	25

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8); габаритные размеры для изделий одной модели, изготовленных в исполнениях серии Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, одинаковые, за исключением размеров, помеченных (**) или (***)

**-габаритная высота изделия серии Стандарт/Стандарт плюс/Оптима;

***- габаритная высота изделия серии Элит.

2.9 Масса изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг			
			Серия Стандарт	Серия Стандарт Плюс	Серия Оптима	Серия Элит
1	2	3	5	6	7	8
	Шкаф лабораторный	ШЛ.01.00	83	103	72	109
		ШЛ.01.01	68	88	64	94
		ШЛ.01.02	53	73	49	79
		ШЛ.01.03	83	103	76	109
		ШЛ.01.04	53	73	49	79
		ШЛ.01.05	106	126	99	132
		ШЛ.01.06	93	113	85	119
		ШЛ.01.07	70	90	64	96
		ШЛ.01.08	83	103	74	109
		ШЛ.02.00	123	157	107	164
		ШЛ.02.01	116	140	93	147
		ШЛ.02.02	112	136	90	144
		ШЛ.02.03	117	141	114	148
		ШЛ.02.04	112	138	109	145
		ШЛ.02.05	158	182	149	189
		ШЛ.02.06	155	179	156	186
		ШЛ.02.07	95	119	91	126
		ШЛ.02.08	125	149	105	156

2.10 Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка изделий указана в таблице 3.
Таблица 3.

№	Наименование изделия			Предельная равномерно- распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Серия	Модель	
1	2	3	4	5
1	Шкаф лабораторный	Стандарт	ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05;	- на полку и дно ящика – 10
		Стандарт плюс	ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08;	
		Оптим	ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05;	
		Элит	ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08	

2.11 Шкаф устанавливается на неподвижные опоры, обеспечивающие устойчивость на твердой горизонтальной поверхности пола. Опоры изделий имеют диапазон регулирования не менее 10 мм для компенсации неровностей пола и придания устойчивого положения.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4.1 Комплектность изделия «Шкаф лабораторный, вариант исполнения: Шкаф лабораторный, серия Стандарт, модели: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.	Шкаф лабораторный, серия Стандарт, модели*: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08, в составе:	ШЛ.01.00.С; ШЛ.01.01.С; ШЛ.01.02.С; ШЛ.01.03.С; ШЛ.01.04.С; ШЛ.01.05.С; ШЛ.01.06.С; ШЛ.01.07.С; ШЛ.01.08.С; ШЛ.02.00.С; ШЛ.02.01.С; ШЛ.02.02.С; ШЛ.02.03.С; ШЛ.02.04.С; ШЛ.02.05.С; ШЛ.02.06.С; ШЛ.02.07.С; ШЛ.02.08.С	1
1.1	- Шкаф лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ШЛ.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.2 Комплектность изделия «Шкаф лабораторный, вариант исполнения: Шкаф лабораторный, серия Стандарт плюс, модели: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Шкаф лабораторный, серия Стандарт плюс, модели*: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08, в составе:	ШЛ.01.00.Сп; ШЛ.01.01.Сп; ШЛ.01.02.Сп; ШЛ.01.03.Сп; ШЛ.01.04.Сп; ШЛ.01.05.Сп; ШЛ.01.06.Сп; ШЛ.01.07.Сп; ШЛ.01.08.Сп; ШЛ.02.00.Сп; ШЛ.02.01.Сп; ШЛ.02.02.Сп; ШЛ.02.03.Сп; ШЛ.02.04.Сп; ШЛ.02.05.Сп; ШЛ.02.06.Сп; ШЛ.02.07.Сп; ШЛ.02.08.Сп	1
1.1	- Шкаф лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ШЛ.00.00 ПС.02	

Примечание: *- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.3 Комплектность изделия «Шкаф лабораторный, вариант исполнения: Шкаф лабораторный, серия Оптима, модели: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Шкаф лабораторный, серия Оптима, модели*: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08, в составе:	ШЛ.01.00.О; ШЛ.01.01.О; ШЛ.01.02.О; ШЛ.01.03.О; ШЛ.01.04.О; ШЛ.01.05.О; ШЛ.01.06.О; ШЛ.01.07.О; ШЛ.01.08.О; ШЛ.02.00.О; ШЛ.02.01.О; ШЛ.02.02.О; ШЛ.02.03.О; ШЛ.02.04.О; ШЛ.02.05.О; ШЛ.02.06.О; ШЛ.02.07.О; ШЛ.02.08.О	1
1.1	- Шкаф лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ШЛ.00.00 ПС.02	

Примечание: *- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.4 Комплектность изделия «Шкаф лабораторный, вариант исполнения: Шкаф лабораторный, серия Элит, модели: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Шкаф лабораторный, серия Элит, модели*: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08, в составе:	ШЛ.01.00.Э; ШЛ.01.01.Э; ШЛ.01.02.Э; ШЛ.01.03.Э; ШЛ.01.04.Э; ШЛ.01.05.Э; ШЛ.01.06.Э; ШЛ.01.07.Э; ШЛ.01.08.Э; ШЛ.02.00.Э; ШЛ.02.01.Э; ШЛ.02.02.Э; ШЛ.02.03.Э; ШЛ.02.04.Э; ШЛ.02.05.Э; ШЛ.02.06.Э; ШЛ.02.07.Э; ШЛ.02.08.Э	1
1.1	- Шкаф лабораторный – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ШЛ.00.00 ПС.02	

Примечание: *- модель выбирается по требованию.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Срок службы

4.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

4.2. Условия транспортирования и хранения

4.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности до 100% при температуре плюс 25°С.

4.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

4.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

4.3. Утилизация

4.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

4.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

4.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

4.4. Гарантии изготовителя

4.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

4.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

-при истечении срока гарантии;
-при нарушении правил эксплуатации и хранения;
-при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф лабораторный: _____
серия модель

Дата изготовления: _____
месяц, число

Заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф лабораторный: _____
серия модель

заводской номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-001-68690950-2012.

Дата упаковывания _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А – 3А1). ООО МК «АСК».

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Шкаф лабораторный: _____
серия модель

заводской № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

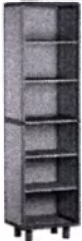
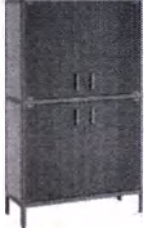
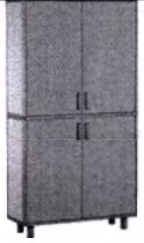
Исполнитель _____
подпись

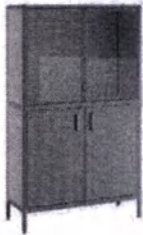
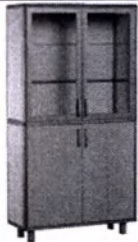
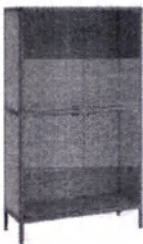
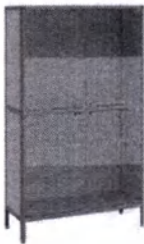
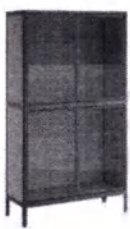
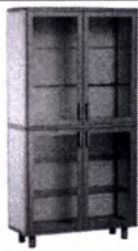
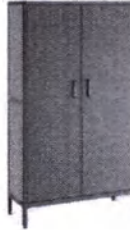
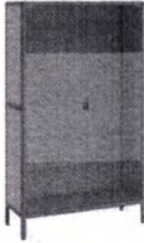
ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ:

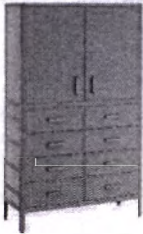
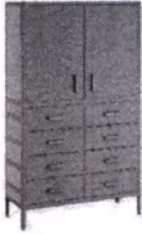
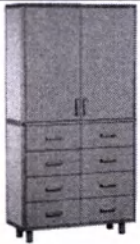
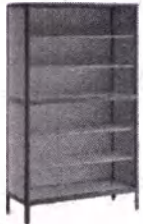
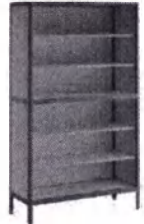
Таблица 5. Шкаф лабораторный, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: ШЛ.01.00; ШЛ.01.01; ШЛ.01.02; ШЛ.01.03; ШЛ.01.04; ШЛ.01.05; ШЛ.01.06; ШЛ.01.07; ШЛ.01.08; ШЛ.02.00; ШЛ.02.01; ШЛ.02.02; ШЛ.02.03; ШЛ.02.04; ШЛ.02.05; ШЛ.02.06; ШЛ.02.07; ШЛ.02.08.

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
ШЛ.01.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШЛ.01.01	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШЛ.01.02	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
ШЛ.01.03	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШЛ.01.04	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШЛ.01.05	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШЛ.01.06	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
ШЛ.01.07	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШЛ.01.08	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШЛ.02.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
ШЛ.02.01	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШЛ.02.02	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШЛ.02.03	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШЛ.02.04	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптимa	Элит
ШЛ.02.05	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШЛ.02.06	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШЛ.02.07	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШЛ.02.08	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Всего прошито и пронумеровано 14
(четырежды) листов

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.



ООО МК «АСК»



ШКАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ НАВЕСНОЙ

Серии:	Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит
Модели:	ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02

Паспорт
ШН.00.00 ПС.02

г. Нижний Новгород

Оглавление

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	5
4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	6
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	7
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	7
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	8
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	9
Приложение 1.....	10

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.
- 1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.
- 1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.
- 1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Шкаф лабораторный навесной, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02. Далее по тексту – Изделие, Шкаф.

Изделие выпускается по ТУ 9452-001-68690950-2011 в составе вариантов исполнения:

- I. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт»
- II. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»
- III. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий « Оптима»
- IV. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит»
- V. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ»

медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011»

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А-3А1)

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 **Назначение изделия:** изделие предназначено хранения сухих предметов и нетоксичных химических веществ в клинико-диагностических лабораториях.

2.4 Потенциальный потребитель – медицинский работник.

2.5 Область применения - клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций.

2.6 Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.7 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

2.8 Основные технические характеристики изделия приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Типоразмерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм	
1	2	3	4	5	6	7
ШКАФЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ НАВЕСНЫЕ						
1	Шкаф лабораторный навесной, серия Стандарт/ Стандарт плюс/ Оптима/ Элит	ШН.01.00	400+550	300+400	400+600	50
		ШН.01.01	400+550	300+400	400+600	50
		ШН.01.02	400+550	300+400	400+600	50
		ШНУ.01.00	600+900	600+900	400+600	50
		ШН.02.00	800+1200	300+400	400+600	50
		ШН.02.01	800+1200	300+400	400+600	50
		ШН.02.02	800+1200	300+400	400+600	50

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8); габаритные размеры для изделий одной модели, изготовленных в исполнениях серии Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, одинаковые, за исключением размеров, помеченных (**) или (***)

**-габаритная высота изделия серии Стандарт/Стандарт плюс/Оптима;

***- габаритная высота изделия серии Элит.

2.9 Масса изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг			
			Серия Стандарт	Серия Стандарт Плюс	Серия Оптима	Серия Элит
1	2	3	5	6	7	8
1	Шкаф лабораторный навесной	ШН.01.00	19	24	16	27
		ШН.01.01	16	21	13	22
		ШН.01.02	15	20	12	22
		ШНУ.01.00	66	71	57	74
		ШН.02.00	40	47	30	50
		ШН.02.01	38	45	33	48
		ШН.02.02	25	35	25	37

2.10 Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка изделий указана в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование изделия			Предельная равномерно- распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Серия	Модель	
1	2	3	4	5
1	Шкаф лабораторный навесной	Стандарт	ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНУ.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02	- на полку – 10
		Стандарт плюс		
		Оптима		
		Элит		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4.1 Комплектность изделия «Шкаф лабораторный навесной, вариант исполнения: Шкаф лабораторный навесной, серия Стандарт, модели: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.	Шкаф лабораторный навесной, серия Стандарт, модели*: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02, в составе:	ШН.01.00.С; ШН.01.01.С; ШН.01.02.С; ШНу.01.00.С; ШН.02.00.С; ШН.02.01.С; ШН.02.02.С	1
1.1	- Шкаф лабораторный навесной – 1 шт.	ШН.00.00 ПС.02	
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ШН.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.2 Комплектность изделия «Шкаф лабораторный навесной, вариант исполнения: Шкаф лабораторный, серия Стандарт плюс, модели: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Шкаф лабораторный навесной, серия Стандарт плюс, модели*: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02, в составе:	ШН.01.00.Сп; ШН.01.01.Сп; ШН.01.02.Сп; ШНу.01.00.Сп; ШН.02.00.Сп; ШН.02.01.Сп; ШН.02.02.Сп	1
1.1	- Шкаф лабораторный навесной – 1 шт.	ШН.00.00 ПС.02	
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ШН.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.3 Комплектность изделия «Шкаф лабораторный навесной, вариант исполнения: Шкаф лабораторный, серия Оптима, модели: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Шкаф лабораторный навесной, серия Оптима, модели*: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02, в составе:	ШН.01.00.О; ШН.01.01.О; ШН.01.02.О; ШНу.01.00.О; ШН.02.00.О; ШН.02.01.О; ШН.02.02.О	1
1.1	- Шкаф лабораторный навесной – 1 шт.	ШН.00.00 ПС.02	
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ШН.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

Таблица 4.4 Комплектность изделия «Шкаф лабораторный навесной, вариант исполнения: Шкаф лабораторный, серия Элит, модели: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1	Шкаф лабораторный навесной, серия Элит, модели*: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02, в составе:	ШН.01.00.Э; ШН.01.01.Э; ШН.01.02.Э; ШНу.01.00.Э;	1
1.1	- Шкаф лабораторный навесной – 1 шт.	ШН.02.00.Э; ШН.02.01.Э; ШН.02.02.Э	
1.2	- Паспорт – 1 шт.	ШН.00.00 ПС.02	

Примечание:

*- модель выбирается по требованию.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Срок службы

4.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

4.2. Условия транспортирования и хранения

4.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности до 100% при температуре плюс 25°С.

4.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

4.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

4.3. Утилизация

4.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

4.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

4.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

4.4. Гарантии изготовителя

4.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

4.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

при истечении срока гарантии;

при нарушении правил эксплуатации и хранения;

при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф лабораторный навесной: _____
серия _____ модель _____

Дата изготовления: _____
месяц, число

Заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2012 и признан годным для эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Шкаф лабораторный навесной: _____
серия _____ модель _____

заводской номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-001-68690950-2012.

Дата упаковывания _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу:
603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А – 3А1). ООО МК «АСК».

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Шкаф лабораторный навесной: _____
серия модель

заводской № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

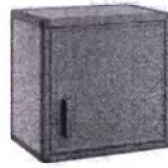
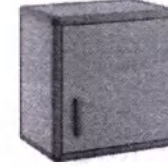
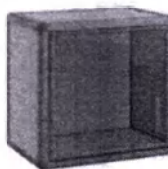
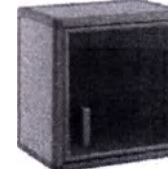
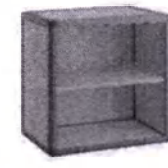
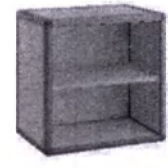
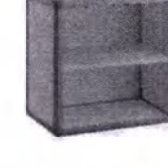
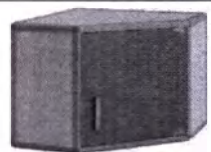
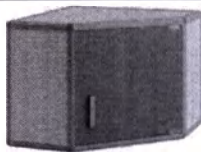
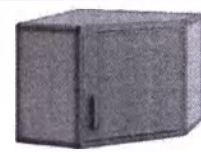
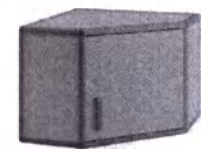
Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

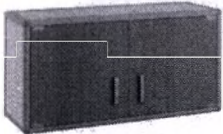
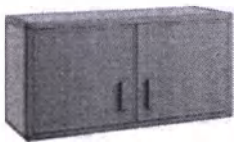
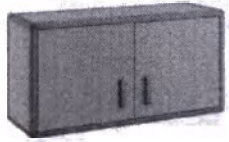
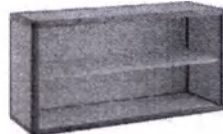
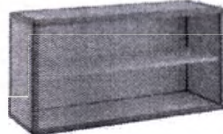
Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____
подпись

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ:

Таблица 5. Шкаф лабораторный навесной, серии: Стандарт, Стандарт плюс, Оптима, Элит, модели: ШН.01.00; ШН.01.01; ШН.01.02; ШНу.01.00; ШН.02.00; ШН.02.01; ШН.02.02.

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
ШН.01.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШН.01.01	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШН.01.02	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШНу.01.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Серия Модель	Общий вид модели			
	Стандарт	Стандарт плюс	Оптима	Элит
ШН.02.00	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШН.02.01	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 
ШН.02.02	☐ 	☐ 	☐ 	☐ 

Всего прошито и пронумеровано 11
(оригиналы) лист 06

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н.



ООО МК «АСК»



СУШИЛКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ

Модель:	СП.01.00
---------	----------

Паспорт
СП.00.00 ПС.02

г. Нижний Новгород

Оглавление

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	4
4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	4
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	5
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	6
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	6
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	7
Приложение 1	8

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием изготовителем основные характеристики изделия.

1.2 Паспорт должен постоянно храниться в течение всего времени с изделием.

1.3 Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на изделие.

1.4 Все записи в настоящем паспорте должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 **Наименование изделия:** Сушилка для лабораторной посуды, модель: СП.01.00. Далее по тексту – Изделие, Сушилка.

Изделие выпускается по ТУ 9452-001-68690950-2011 в составе вариантов исполнения:

- I. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт»
- II. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Стандарт плюс»
- III. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Оптима»
- IV. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «Элит»
- V. Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий «КДЛ»

медицинского изделия «Набор мебели медицинской для клинико-диагностических лабораторий по ТУ 9452-001-68690950-2011»

Регистрационное удостоверение _____

2.2 **Сведения о производителе:**

ООО МК «АСК»

Юридический адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д.13, кв. 230.

Адрес места производства: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А-3А1)

Тел.: (831) 277-03-12, 277-03-14, 277-03-18, E-mail: zakaz@tdask.ru, www.tdask.ru

2.3 **Назначение изделия:** изделие предназначено для хранения сухих предметов и нетоксичных химических веществ в клинико-диагностических лабораториях.

2.4 Потенциальный потребитель – медицинский работник.

2.5 Область применения - клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций.

2.6 Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.7 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям для группы 2 по ГОСТ Р 50444.

2.8 Основные технические характеристики изделий приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Типоразмерный шаг, мм
			Длина, (±4) мм	Глубина, (±4) мм	Высота, (±4) мм	
1	2	3	4	5	6	7
СУШИЛКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ						
1	Сушилка для лабораторной посуды	СП.01.00	400÷600	160÷260	700÷900	20

Примечание:

*-габаритные размеры изделия определяются из типоразмерного ряда в указанном диапазоне (см. столбцы 4-6) с заданным шагом (см. столбец 8)

2.9 Масса изделий указана в Таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Обозначение модели	Масса не более, кг
1	2	3	4
1	Сушилка для лабораторной посуды	СП.01.00	18

2.10 Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка изделий указана в таблице 3.

Таблица 3.

№	Наименование изделия		Предельная рабочая равномерно-распределенная нагрузка, кг
	Наименование	Модель	
1	2	3	4
1	Сушилка для лабораторной посуды	СП.01.00	-на полку (поддон)- 5 -на штифт - 1

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 4.1 Комплектность изделия «Сушилка для лабораторной посуды, вариант исполнения: Сушилка для лабораторной посуды, модель: СП.01.00».

№ п/п	Наименование изделия	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.	Сушилка для лабораторной посуды, модель: СП.01.00, в составе:	СП.01.00	1
1.1	- Сушилка для лабораторной посуды – 1 шт.		
1.2	- Паспорт – 1 шт.	СП.00.00 ПС.02	

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Срок службы

4.1.1. Средний срок службы - 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

4.2. Условия транспортирования и хранения

4.2.1 Транспортирование изделия осуществляется в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2.2 Размещение и крепление упаковок с изделиями в транспортных средствах обеспечивает их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

4.2.3 Условия транспортирования изделия крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, при

температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С; относительной влажности до 100% при температуре плюс 25°С.

4.2.4 Изделия хранятся в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, в упакованном виде в вертикальном положении.

4.2.5 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С; относительной влажности воздуха не более 98% при температуре плюс 25°С. Допускается хранение изделий по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2.6 Хранение изделия в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

4.3. Утилизация

4.3.1 Изделие при хранении и использовании не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

4.3.2 Утилизация изделия осуществляется после выработки ресурса или после завершения срока эксплуатации изделия.

4.3.3 Изделия утилизируются в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 по классу А. Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями – по классу Б.

4.4. Гарантии изготовителя

4.4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня отгрузки его предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

4.4.3 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

4.4.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сушилка для лабораторной посуды: _____
серия _____ модель _____

Дата изготовления: _____
месяц, число

Заводской номер _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, соответствует ТУ 9452-001-68690950-2012 и признана годной для эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Сушилка для лабораторной посуды: _____
серия _____ модель _____

заводской номер _____, упаковано ООО МК «АСК» согласно требованиям ТУ 9452-001-68690950-2012.

Дата упаковывания _____
(месяц, год)

Упаковку произвел

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию – изготовителю по адресу: 603147, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.60 (лит. 3А – 3А1). ООО МК «АСК».

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Сушилка для лабораторной посуды: _____
серия _____ модель _____

заводской № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия

б) Заполняется продавцом

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняется исполнителем ремонтных работ

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Сведения о ремонте: _____

Исполнитель _____
подпись

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ:

Таблица 5. Сушилка для лабораторной посуды, модель: СП.01.00

Модель	Общий вид модели
СП.01.01	

Всего прошито и пронумеровано 8
(восемь) лист 8

Генеральный директор ООО МК «АСК»
Воробьев С.Н. _____

