

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



М. Е. Сенина

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК ВИРУСА ГЕПАТИТА С (HCV)
МЕТОДОМ ОТ-ПЦР С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ
«РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» «АМПЛИПРАЙМ® HCV-ТЕСТ»
ПО ТУ 21.20.23-208-09286667-2023

Инструкция по применению версии 27.09.23-1

Лист утверждения

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV)
методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени»
«АмплиПрайм® HCV-тест» по ТУ 21.20.23-208-09286667-2023

АмплиПрайм® HCV-тест

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



ООО «НекстБио», Россия, 111394,
г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2,
тел. (495) 620-08-73, e-mail: info@nextbio.ru

 **НекстБИО**
Биотехнологическая
компания

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	3
1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА	4
2.1. Формы выпуска, состав и комплектность	4
2.2. Принцип метода	7
2.3. Техническое обслуживание и ремонт	8
3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА	8
3.1. Внутренний контроль качества	8
3.2. Рекомендуемые контрольные материалы	9
4. ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	9
5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	10
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	12
6.1. Взятие и предварительная обработка исследуемого материала	12
6.2. Экстракция РНК из исследуемых образцов	12
6.3. Обратная транскрипция, амплификация, детекция продуктов амплификации, анализ и интерпретация результатов	12
7. ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	13
8. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	14
8.1. Экстракция РНК из исследуемого материала	14
8.2. Подготовка реагентов для амплификации	16
8.3. Внесение проб РНК, проведение ОТ-ПЦР и детекции	17
8.4. Анализ и вычисление результатов	18
8.5. Интерпретация результатов	19
8.6. Возможные ошибки и рекомендации по их решению	20
8.7. Диагностическое значение полученного результата	20
9. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА	21
9.1. Предел обнаружения	21
9.2. Аналитическая специфичность	21
9.3. Воспроизводимость и повторяемость измерения	22
9.4. Диагностическая специфичность и диагностическая чувствительность	22
9.5. Оценка влияния интерферирующих веществ	22
10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАБОРА	24
10.1. Срок годности	24
10.2. Транспортирование	24
10.3. Хранение	24
11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	25
12. СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	26

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Ct	– Cycle threshold (пороговый цикл)
HCV	– <i>Hepatitis C virus</i>
ВКО	– внутренний контрольный образец
ВОЗ	– всемирная организация здравоохранения
МЕ	– международные единицы
ДНК	– дезоксирибонуклеиновая кислота
ДНКаза	– дезоксирибонуклеаза
дНТФ	– дезоксирибонуклеотидтрифосфаты
кДНК	– комплементарная ДНК, получаемая в реакции обратной транскрипции на матрице РНК
ОТ-ПЦР	– обратная транскрипция и полимеразная цепная реакция
НК	– нуклеиновая кислота
ПКО	– положительный контрольный образец
К-	– отрицательный контроль ОТ-ПЦР
ОКО	– отрицательный контрольный образец экстракции
ПЦР	– полимеразная цепная реакция
РНК	– рибонуклеиновая кислота
РНКаза	– рибонуклеаза
РУ	– регистрационное удостоверение
ТУ	– технические условия
УДГ	– урацил-ДНК-гликозилаза

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® HCV-тест» по ТУ 21.20.23-208-09286667-2023.

Далее по тексту употребляется краткое наименование: Набор реагентов «АмплиПрайм® HCV-тест», а также сокращение Набор реагентов.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реагентов «АмплиПрайм® HCV-тест» предназначен для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) в плазме крови методом ОТ-ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени».

1.2. Материалом для проведения ОТ-ПЦР служат пробы РНК, экстрагированные из исследуемого материала с помощью наборов реагентов, рекомендованных в разделе инструкции «Дополнительное оборудование и материалы».

1.3. Функциональное назначение: Набор реагентов предназначен для диагностики *in vitro* (выявление РНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР в плазме крови).

1.4. Показания к проведению исследования: Набор реагентов используется в клинической лабораторной диагностике для исследования плазмы крови, полученной от лиц с диагнозом вирусный гепатит С (после положительного серологического теста), для диагностики вирусного гепатита С, а также для скрининга и мониторинга эффективности лечения вирусного гепатита С. Результаты ПЦР-исследования учитываются в комплексной диагностике заболевания.

1.5. Применение набора реагентов не зависит от популяционных и демографических аспектов.

1.6. Потенциальные пользователи: Набор реагентов должен использоваться только квалифицированным, обученным (в области клинической лабораторной диагностики) персоналом (врачи клинической лаборатории и медицинские лабораторные техники, обученные молекулярным биологическим методикам).

1.7. Применять набор реагентов строго по назначению согласно инструкции по применению.

1.8. Противопоказания к применению: Нарушение целостности упаковки, истекший срок годности, несоблюдение требований инструкции.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

2.1. Формы выпуска, состав и комплектность

Набор реагентов выпускается в четырех формах (состав набора и комплектность поставки указаны в таблице 1 и 2 соответственно). Все формы предназначены для проведения реакции обратной транскрипции РНК и амплификации ДНК с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени». Для проведения полного исследования необходимо использовать наборы реагентов для экстракции НК, рекомендованные в разделе «Дополнительное оборудование и материалы».

Форма выпуска 1 включает смесь для проведения ОТ-ПЦР в пробирке объемом 1,5 или 2 мл для дозирования в любые типы пробирок. Форма предназначена для применения совместно с амплификаторами планшетного и роторного типа и рассчитана на проведение исследования 100 образцов, включая контроли. Форма может быть использована как для ручной раскапки, так и совместно с автоматическими станциями для приготовления и дозирования реакционных смесей.

Форма выпуска 2 включает смесь для проведения ОТ-ПЦР, раскапанную под прослойку парафина по стрипованным (12,5 стрипов по 8 пробирок) пробиркам объемом 0,2 мл. Форма предназначена для применения совместно с амплификаторами планшетного типа и рассчитана на проведение исследования 100 образцов, включая контроли.

Форма выпуска 3 включает смесь для проведения ОТ-ПЦР, раскапанную под прослойку парафина по пробиркам объемом 0,2 мл. Форма предназначена для применения совместно с амплификаторами планшетного и роторного типа и рассчитана на проведение исследования 100 образцов, включая контроли.

Форма выпуска 4 включает лиофилизированную смесь для проведения ОТ-ПЦР в стрипованных пробирках (12 стрипов по 8 пробирок) объемом 0,2 мл. Форма предназначена для применения совместно с амплификаторами планшетного типа и рассчитана на проведение исследования 96 образцов, включая контроли.

Таблица 1

Состав набора

Реагент	Объем, мл	Количество	Описание
Форма выпуска 1			
ПЦР-смесь HCV	0,6	2 пробирки	Буферный раствор со специфическими праймерами, флуоресцентно-мечеными зондами и ДНТФ. Прозрачная жидкость.
Буфер С	0,3	2 пробирки	Буферный раствор, содержащий ионы двухвалентного магния. Прозрачная жидкость.
Реагент TG	0,015	2 пробирки	Буферный раствор, содержащий 1-тиоглицерол. Прозрачная жидкость.
Тaq полимераза	0,06	2 пробирки	Раствор с термостабильной ДНК-полимеразой Taq и урацил-ДНК-гликозилазой. Прозрачная жидкость.
Ревертаза R	0,015	2 пробирки	Буферный раствор с РНК-зависимой ДНК-полимеразой. Прозрачная жидкость.
ПКО-2 HCV	0,025	4 пробирки	Положительный контрольный образец. Прозрачная жидкость.
ВКО В	0,6	2 пробирки	Внутренний контрольный образец. Прозрачная жидкость.
ОКО	1,1	2 пробирки	Отрицательный контрольный образец. Прозрачная жидкость.
К-	0,3	2 пробирки	Отрицательный контрольный образец. Прозрачная жидкость.
Форма выпуска 2			
ПЦР-смесь HCV	0,01	100 пробирок (12,5 стрипов по 8 пробирок) ¹	Буферный раствор со специфическими праймерами, флуоресцентно-мечеными зондами и ДНТФ. Прозрачная жидкость, раскапана в стрипованные пробирки под парафин белого цвета.
Буфер D	0,6	2 пробирки	Буферный раствор, содержащий ионы двухвалентного магния. Прозрачная жидкость.
Реагент TG	0,015	2 пробирки	Буферный раствор, содержащий 1-тиоглицерол. Прозрачная жидкость.
Тaq полимераза	0,06	2 пробирки	Раствор с термостабильной ДНК-полимеразой Taq и урацил-ДНК-гликозилазой. Прозрачная жидкость.
Ревертаза R	0,015	2 пробирки	Буферный раствор с РНК-зависимой ДНК-полимеразой. Прозрачная жидкость.
ПКО-2 HCV	0,025	4 пробирки	Положительный контрольный образец. Прозрачная жидкость.
ВКО В	0,6	2 пробирки	Внутренний контрольный образец. Прозрачная жидкость.
ОКО	1,1	2 пробирки	Отрицательный контрольный образец. Прозрачная жидкость.
К-	0,3	2 пробирки	Отрицательный контрольный образец. Прозрачная жидкость.

¹ Пробирки с голубым парафином не используются.

Реагент	Объем, мл	Количество	Описание
Форма выпуска 3			
ПЦР-смесь HCV	0,01	100 пробирок	Буферный раствор со специфическими праймерами, флуоресцентно-мечеными зондами и дНТФ. Прозрачная жидкость, раскапана под парафин.
Буфер D	0,6	2 пробирки	Буферный раствор, ионы двухвалентного магния. Прозрачная жидкость.
Реагент TG	0,015	2 пробирки	Буферный раствор, содержащий 1-тиоглицерол. Прозрачная жидкость.
Taq полимеразы	0,06	2 пробирки	Раствор с термостабильной ДНК-полимеразой Taq и урацил-ДНК-гликозилазой. Прозрачная жидкость.
Реввертаза R	0,015	2 пробирки	Буферный раствор с РНК-зависимой ДНК-полимеразой. Прозрачная жидкость.
ПКО-2 HCV	0,025	4 пробирки	Положительный контрольный образец. Прозрачная жидкость.
ВКО В	0,6	2 пробирки	Внутренний контрольный образец. Прозрачная жидкость.
ОКО	1,1	2 пробирки	Отрицательный контрольный образец. Прозрачная жидкость.
К-	0,3	2 пробирки	Отрицательный контрольный образец. Прозрачная жидкость.
Форма выпуска 4			
ПЦР-смесь HCV Lyo	-	96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок)	Лиофилизированная ПЦР-смесь, содержащая специфические праймеры, флуоресцентно-меченые зонды, дНТФ, ионы двухвалентного магния, урацил-ДНК-гликозилазу, термостабильную ДНК-полимеразу Taq, декстран, трегалозу. Лиофилизат белого цвета.
ПКО-2 HCV Lyo	-	4 пробирки	Положительный контрольный образец. Лиофилизат белого цвета.
ВКО В Lyo	-	2 пробирки	Внутренний контрольный образец. Лиофилизат белого цвета.
ОКО	1,1	2 пробирки	Отрицательный контрольный образец. Прозрачная жидкость.
Разбавитель	1,2	2 пробирки	Раствор для восстановления ПКО-2 HCV Lyo, ВКО В Lyo. Отрицательный контрольный образец. Прозрачная жидкость.

Комплектность набора

Компонент	Формат	Количество
Набор реагентов (форма выпуска 1, 2, 3 или 4)	-	1
Инструкция по применению набора	в электронном виде ² на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru	-
Краткое руководство по применению набора	в бумажном виде	1
Комплект вкладышей к набору	в бумажном виде	1
Паспорт качества	в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru	-

2.2. Принцип метода

Принцип тестирования основан на проведении обратной транскрипции (синтезе молекулы кДНК по молекуле РНК с использованием фермента ревертазы) и последующей амплификации фрагмента кДНК вируса гепатита С и внутреннего контрольного образца (ВКО) при помощи специфичных к этим участкам праймеров и фермента Taq-полимеразы. Детекция продуктов амплификации происходит путем измерения флуоресцентного сигнала в режиме «реального времени» за счет использования в составе реакционной смеси флуоресцентно-меченых олигонуклеотидов (зондов). Зонды гибридизуются с комплементарным участком амплифицируемой кДНК-мишени, в результате чего происходит нарастание интенсивности флуоресценции. Это позволяет регистрировать накопление специфического продукта амплификации путем измерения интенсивности флуоресцентного сигнала с помощью амплификатора с системой детекции флуоресцентного сигнала в режиме «реального времени».

Набор содержит систему защиты от контаминации ампликонами за счет применения фермента урацил-ДНК-гликозилазы (УДГ) и трифосфата дезоксиуридина. Фермент УДГ распознает и катализирует разрушение цепей ДНК, содержащих дезоксиуридин, но не ДНК, содержащей дезокситимидин. Дезоксиуридин отсутствует в природной ДНК, но всегда присутствует в ампликонах, поскольку трифосфат дезоксиуридина входит в состав смеси дНТФ в реагентах для амплификации. Дезоксиуридин делает контаминирующие ампликоны восприимчивыми к разрушению ферментом УДГ до начала амплификации ДНК-мишени, и, следовательно, они не могут быть в дальнейшем амплифицированы.

Фермент УДГ термолабилен и инактивируется при нагревании выше 50 °С и поэтому не разрушает ампликоны мишени, нарабатываемые в процессе ПЦР.

На этапе ОТ-ПЦР одновременно в одной пробирке амплифицируются участок кДНК вируса гепатита С (HCV) и искусственно синтезированная последовательность ВКО. Результаты амплификации регистрируются по двум различным каналам флуоресцентной детекции (см. таблицу 3).

Таблица 3

Соответствие НК-мишеней и каналов флуоресцентной детекции

Канал для флуорофора	FAM	R6G ³
НК-мишень	ВКО (экзогенный ВКО)	РНК HCV
Область амплификации	Искусственно синтезированная последовательность	5' - UTR

² Печатная версия инструкции доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73.

³ Детекция сигнала для флуорофора R6G осуществляется по каналу детекции для аналогичных флуорофоров HEX, JOE, Yellow, VIC.

2.3. Техническое обслуживание и ремонт

Набор не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

3.1. Внутренний контроль качества

3.1.1. Отрицательный и положительный контроли исследования

Для контроля всех этапов исследования, эффективности экстракции РНК и оценки влияния ингибиторов ОТ-ПЦР предусмотрено использование экзогенного ВКО – искусственной РНК-содержащей конструкции, которая вносится в каждый исследуемый образец биоматериала, отрицательный контрольный образец этапа экстракции и положительный контрольный образец. Результаты исследования образцов должны соответствовать заданным критериям валидности, указанным в разделе «Интерпретация результатов». Если результаты тестирования исследуемых образцов, полученные для ВКО, не соответствуют заданным критериям валидности, указанным в разделе «Интерпретация результатов», то результаты исследования данных образцов считаются невалидными, требуется повторить их анализ, начиная с этапа экстракции.

Отрицательный контрольный образец (ОКО) тестируется, начиная с этапа экстракции, и позволяет контролировать возможную контаминацию другими образцами или ампликонами. В пробирке с отрицательным контролем не должна детектироваться РНК HCV. В случае несоответствия результата, полученного для контрольного образца, заданным критериям валидности, положительные результаты для исследуемых образцов в постановке считаются недостоверными, необходимо предпринять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации и повторить исследование всех исследуемых образцов, в которых обнаружена РНК HCV, и отрицательного контроля, начиная с этапа экстракции.

Отрицательный контроль ОТ-ПЦР (К-) тестируется, начиная с этапа ПЦР, и позволяет дополнительно контролировать возможную контаминацию ампликонами. В пробирке с отрицательным контролем ОТ-ПЦР не должна детектироваться РНК HCV или ВКО. В случае несоответствия результата, полученного для контрольного образца заданным критериям валидности, положительные результаты для исследуемых образцов в постановке считаются недостоверными, необходимо предпринять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации и повторить исследование всех образцов, начиная с этапа ОТ-ПЦР.

В качестве положительного контроля используется реагент ПКО-2 HCV (или ПКО-2 HCV Lyo), входящий в состав набора. В случае несоответствия результатов для положительного контроля заданным критериям валидности, результаты для всех образцов в постановке считаются недостоверными, требуется повторить исследование всех исследуемых образцов и контролей, начиная с этапа ОТ-ПЦР.

3.1.2. Контроль ингибирования

Для контроля всех этапов исследования, эффективности экстракции РНК и оценки влияния ингибиторов ПЦР предусмотрено использование экзогенного ВКО (реагент ВКО В), который добавляется в каждый исследуемый и контрольные образцы на этапе экстракции. Результаты исследования ВКО должны соответствовать заданным критериям валидности для положительных и отрицательных исследуемых образцов, указанным в разделе «Интерпретация результатов». Если в исследуемых образцах не обнаружена последовательность ВКО, то результаты исследования данных образцов считаются недостоверными, требуется повторить их анализ, начиная с этапа экстракции.

3.1.3. Мониторинг лаборатории на наличие контаминации

Рекомендуется раз в месяц проводить мониторинг лаборатории на контаминацию продуктами амплификации, исследуемыми образцами, положительными контрольными образцами. Оценка наличия/отсутствия контаминации проводится путем исследования смывов с различных объектов: пипеток, рабочих поверхностей лабораторной мебели, оборудования и поверхностей помещений. Взятие и исследование смывов следует проводить согласно процедуре, описанной в МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп патогенности». При обнаружении контаминации необходимо провести обработку лаборатории моющими и дезинфицирующими растворами согласно указаниям, описанным в МУ 1.3.2569-09. Также для предотвращения контаминации лаборатории или в качестве мер по деонтаминации рабочих зон рекомендуется использовать раствор для дезактивации нуклеиновых кислот, например, «Олигатор» производства ООО «НекстБио», Россия.

3.2. Рекомендуемые контрольные материалы

В качестве контрольных материалов для проверки заявленных функциональных характеристик набора могут быть использованы зарегистрированные на территории Российской Федерации панели контрольных образцов, предназначенные для проведения внутреннего и внешнего контроля качества лабораторных исследований по обнаружению РНК HCV.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.1. Набор применяется только для диагностики *in vitro*.

4.2. Набор предназначен для работы только с исследуемым материалом, указанным в разделе «Назначение». Исследование других видов биологического материала может привести к получению недостоверных результатов.

4.3. Получение достоверных результатов обеспечивается выполнением требований, предъявляемых к взятию, транспортированию, подготовке и хранению образцов исследуемого материала (см. раздел «Исследуемый материал»).

4.4. С помощью набора возможно ПЦР-исследование только проб РНК, экстрагированных из исследуемого материала совместно с внутренним контрольным образцом – ВКО В. Без использования ВКО В невозможно провести оценку валидности постановки.

4.5. Набор предназначен для профессионального применения. Набор должен использоваться только квалифицированным, обученным (в области клинической лабораторной диагностики) персоналом (врачи клинической лаборатории и медицинские лабораторные техники, обученные молекулярным биологическим методикам).

4.6. При работе с набором следует использовать только амплификаторы с системой детекции флуоресцентного сигнала, характеристики которых удовлетворяют требованиям, указанным в разделе «Дополнительное оборудование и материалы».

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

5.1. Работа должна проводиться в лаборатории, выполняющей молекулярно-биологические (ПЦР) исследования биологического материала на наличие возбудителей инфекционных болезней, с соблюдением требований СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». В соответствии с п. 4.4. МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности» допускается проведение исследований биологического материала (без предварительного накопления возбудителя) на наличие ДНК (РНК) возбудителей парентеральных вирусных гепатитов в лаборатории, имеющей санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности проведения работ с возбудителями III–IV группы патогенности. Материал для исследований подлежит предварительной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ 1.3.2569-09.

5.2. При работе необходимо всегда выполнять следующие требования:

- Применять набор строго по назначению в соответствии с данной инструкцией. Отклонение от прописанных процедур и порядка действий может привести к получению недостоверных результатов анализа.

- Лабораторный процесс должен быть односторонним. Анализ следует проводить в отдельных помещениях (зонах) в соответствии с МУ 1.3.2569-09. Не возвращать образцы, оборудование и реагенты в зону, в которой была проведена предыдущая стадия процесса.

- Рассматривать исследуемые образцы как инфекционно-опасные, организовывать работу и хранение в соответствии с СанПиН 3.3686-21.

- Убирать и дезинфицировать разлитые образцы или реагенты, используя дезинфицирующие средства в соответствии с СанПиН 3.3686-21.

- Удалять неиспользованные реагенты, реагенты с истекшим сроком годности, а также использованные реагенты, упаковку⁴, биологический материал⁵, включая материалы, инструменты и предметы, загрязненные биологическим материалом, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

ВНИМАНИЕ! При удалении отходов после амплификации (пробирок, содержащих продукты ПЦР) недопустимо открывание пробирок и разбрызгивание содержимого, поскольку это может привести к контаминации продуктами ПЦР лабораторной зоны, оборудования и реагентов.

- Использовать и менять при каждой операции одноразовые наконечники для автоматических дозаторов с фильтром. Одноразовую пластиковую посуду (пробирки, наконечники) необходимо сбрасывать в специальный контейнер, содержащий дезинфицирующее средство, которое может быть использовано для обеззараживания медицинских отходов.

⁴ Неиспользованные реагенты, реагенты с истекшим сроком годности, использованные реагенты, упаковка относятся к классу опасности медицинских отходов Г.

⁵ Биологический материал, включая инструменты и предметы, загрязненные материалом, относятся к классу опасности медицинских отходов Б.

- Набор предназначен для однократного применения для проведения исследования указанного количества образцов (см. раздел «Формы выпуска, состав и комплектность»).

- К работе с набором допускается только персонал, обученный методам молекулярной диагностики и правилам работы в клинично-диагностической лаборатории в установленном порядке (в соответствии с требованиями СанПин 3.3686-21).

- Не использовать набор, если нарушена внутренняя упаковка или внешний вид реагента не соответствует описанию.

- Не использовать набор, если не соблюдались условия транспортирования и хранения согласно инструкции.

- Не смешивать реагенты разных серий.

- Не использовать набор по истечении срока годности.

- Использовать одноразовые неопудренные перчатки, лабораторные халаты, защищать глаза во время работы с образцами и реагентами. Тщательно вымыть руки по окончании работы. Все операции проводятся только в перчатках для исключения контакта с организмом человека.

- Не есть, не пить и не курить в процессе использования набора. Избегать контакта реагентов с кожей, глазами и слизистой оболочкой. Не глотать.

- При контакте немедленно промыть пораженное место большим количеством воды и при плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью. При попадании внутрь рвоту не вызывать, прополоскать рот водой, обратиться к врачу при плохом самочувствии.

5.3. При использовании по назначению и соблюдении вышеперечисленных мер предосторожности набор безопасен. Реагенты набора (кроме Taq полимеразы, Реагента TG и Разбавителя) содержат натрия азид в концентрации не более 0,1 % и соответственно не классифицируются как опасные и не требуют соблюдения специальных мер предосторожности, кроме указанных в данном разделе.

Реагент TG содержит 1-тиоглицерол в концентрации не более 1 % и соответственно не классифицируется как опасный и не требует соблюдения специальных мер предосторожности, кроме указанных в данном разделе.

5.4. Специфические воздействия набора на организм человека:

- Канцерогенный эффект отсутствует.

- Мутагенное действие отсутствует.

- Репродуктивная токсичность отсутствует.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

6.1. Взятие и предварительная обработка исследуемого материала

Взятие и предварительную обработку исследуемого материала проводить согласно МУ 1.3.2569-09.

6.2. Экстракция РНК из исследуемых образцов

6.2.1. Набор реагентов для экстракции нуклеиновых кислот, зарегистрированный в РФ и соответствующий следующим требованиям:

- набор позволяет выделять НК из биологического материала (плазма крови) и для последующего исследования методом ОТ-ПЦР;
- набор не относится к экспресс-методам экстракции НК;
- набор позволяет исследовать образцы объемом не менее 100 мкл;
- набор позволяет проводить элюцию очищенной НК в объеме не менее 50 мкл.

В ходе проведения клинических испытаний валидацию прошли «МагноПрайм® Ультра» (РУ № РЗН 2023/19437) и «АмплиПрайм РИБО-преп» (РУ № ФСР 2012/14017).

6.2.2. Дополнительные материалы и оборудование, необходимые для экстракции НК, – согласно инструкции к набору реагентов для экстракции НК.

6.3. Обратная транскрипция, амплификация, детекция продуктов амплификации, анализ и интерпретация результатов

6.3.1. Одноразовые полипропиленовые пробирки, свободные от ДНКаз/РНКаз, следующих видов (при использовании формы выпуска 1):

- тонкостенные пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл с выпуклой или плоской оптически прозрачной крышкой или пробирки объемом 0,2 мл в стрипах по 8 шт. с прозрачными крышками – для проведения ПЦР при использовании прибора планшетного типа;
- тонкостенные пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл с плоской крышкой или пробирки для ПЦР объемом 0,1 мл в стрипах по 4 шт. с крышками – для проведения ПЦР при использовании прибора роторного типа.

6.3.2. Завинчивающиеся пробирки и крышки к ним или плотно закрывающиеся пробирки объемом 1,5 - 2 мл – для приготовления реакционной смеси (при использовании формы выпуска 1, 2 или 3).

6.3.3. Одноразовые наконечники, свободные от ДНКаз/РНКаз, для дозаторов переменного объема с фильтром до 100 мкл.

6.3.4. Штативы для пробирок объемом 0,2 мл или 0,1 мл (в соответствии с используемыми пробирками для ПЦР).

6.3.5. Бокс абактериальной воздушной среды (ПЦР-бокс).

6.3.6. Центрифуга-вортекс.

6.3.7. Автоматические дозаторы переменного объема.

6.3.8. Станция автоматическая с модулем для приготовления и раскапки реакционных смесей и комплект расходных материалов к ней согласно инструкции Производителя, - при использовании формы выпуска 1 в случае приготовления реакционной смеси с использованием автоматической станции.

6.3.9. Программируемый амплификатор с системой детекции флуоресцентного сигнала в режиме «реального времени» роторного типа, либо планшетного типа, зарегистрированный в РФ и соответствующий следующим требованиям:

- наличие независимых каналов флуоресцентной детекции для флуорофоров FAM и R6G со следующими характеристиками:

Таблица 4

Требуемые характеристики каналов флуоресцентной детекции

Канал для флуорофора	Длины волн, нм			
	Возбуждения		Детекции	
	Минимум	Максимум	Минимум	Максимум
FAM	450	470	510	530
R6G	515	532	545	580

- для приборов планшетного типа наличие подогреваемой крышки с температурой более 100 °С;
- точность поддержания температуры $\leq \pm 0,4$ °С;
- скорость нагрева не менее 2 °С/сек;
- скорость охлаждения не менее 1 °С/сек.

В ходе проведения клинических испытаний валидацию прошли следующие программируемые амплификаторы с системой детекции флуоресцентного сигнала в режиме «реального времени»: Rotor-Gene Q (ПУ № ФСЗ 2010/07595), Applied Biosystems QuantStudio 5 (ПУ № РЗН 2019/8446), C1000 Touch в комплекте с модулем CFX96 (ПУ № ФСЗ 2008/03399), ДТпрайм (ПУ № ФСР 2011/10229).

6.3.10. Холодильник от 2 до 8 °С с морозильной камерой от минус 24 до минус 16 °С.

6.3.11. Отдельный халат, шапочки, обувь и одноразовые перчатки в соответствии с МУ 1.3.2569-09.

6.3.12. Емкость для сброса наконечников.

7. ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Материалом для исследования служит плазма крови.

Взятие, предварительную обработку, транспортирование и хранение исследуемого биологического материала следует проводить в соответствии с МУ 1.3.2569-09.

8. ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование должно проводиться при нормальных показателях микроклимата клинико-диагностической лаборатории⁶:

- температура окружающего воздуха от 20 до 28 °С;
- относительная влажность 40 – 75 %.

8.1. Экстракция РНК из исследуемого материала

Для экстракции РНК использовать наборы реагентов, рекомендованные Производителем в разделе «Дополнительное оборудование и материалы». Порядок работы с наборами для экстракции НК смотрите в инструкции по их применению.

ВНИМАНИЕ! При проведении исследования недопустимо использование экспресс-методов экстракции НК.

8.1.1. При использовании форм выпуска 1, 2, 3

Каждая группа экстрагируемых образцов должна сопровождаться постановкой отрицательного контроля (ОКО) и положительного контрольного образца (ПКО-2 HCV) в одном повторе.

Перед экстракцией необходимо разморозить контрольные образцы: ВКО В, ОКО и ПКО-2 HCV.

ВНИМАНИЕ! Размораживать следует только необходимое количество пробирок с реагентами. Для одной постановки ОТ-ПЦР требуется разморозка не более одной пробирки с ПКО-2 HCV.

В процессе экстракции РНК использовать объемы реагентов и исследуемых образцов согласно таблице 5.

ВНИМАНИЕ! Реагент ВКО В вносится в каждую пробирку с исследуемыми и контрольными образцами (включая положительный и отрицательный контроли).

ВНИМАНИЕ! Для экстракции РНК из 100 мкл исследуемого образца используется комплект «АмплиПрайм РИБО-преп», из 200 мкл – «МагноПрайм® Ультра» форма выпуска 1, из 1000 мкл – «МагноПрайм® Ультра» форма выпуска 2 или другие рекомендуемые наборы (см. п. 6.2).

Таблица 5

Объемы реагентов и исследуемых образцов при использовании форм выпуска 1, 2, 3

Реагент / образец	Объем	Добавлять
При экстракции из 100 мкл образца		
Исследуемый образец	100 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	100 мкл	в пробирку для ОКО
ПКО-2 HCV	10 мкл + 90 мкл ОКО	в пробирку для ПКО
Реагент, используемый для элюции РНК	50 ⁷ мкл	в каждую пробирку

⁶ Указаны допустимые нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне производственных помещений в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

⁷ При необходимости допускается увеличение объема элюции до 90 мкл.

Реагент / образец	Объем	Добавлять
При экстракции из 200 мкл образца		
Исследуемый образец	200 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	200 мкл	в пробирку для ОКО
ПКО-2 HCV	10 мкл + 190 мкл ОКО	в пробирку для ПКО
Реагент, используемый для элюции РНК	100 мкл	в каждую пробирку
При экстракции из 1000 мкл образца		
Исследуемый образец	1000 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	1000 мкл	в пробирку для ОКО
ПКО-2 HCV	10 мкл + 990 мкл ОКО	в пробирку для ПКО
Реагент, используемый для элюции РНК	100 мкл	в каждую пробирку

8.1.2. При использовании формы выпуска 4

Каждая группа экстрагируемых образцов должна сопровождаться постановкой отрицательного контроля (ОКО) и положительного контрольного образца (ПКО-2 HCV Lyo) в одном повторе.

ВНИМАНИЕ! Реагенты ПКО-2 HCV Lyo и ВКО В Lyo требуют восстановления.

Для восстановления лиофилизированных реагентов необходимо в пробирку с лиофилизатом добавить **Разбавитель** в объеме, указанном в таблице 6, перемешать содержимое пробирок с восстановленными реагентами, осадить капли на вортексе.

Таблица 6

Объем Разбавителя для восстановления реагентов

Реагент	Разбавитель, мкл
ПКО-2 HCV Lyo	25
ВКО В Lyo	600

В процессе экстракции РНК использовать объемы реагентов и исследуемых образцов согласно таблице 7.

ВНИМАНИЕ! Реагент ВКО В Lyo вносится в каждую пробирку с исследуемыми и контрольными образцами (включая положительный и отрицательный контроли).

ВНИМАНИЕ! Для экстракции РНК из 100 мкл исследуемого образца используется комплект «АмплиПрайм РИБО-преп», из 200 мкл – «МагноПрайм® Ультра», форма выпуска 1, из 1000 мкл – «МагноПрайм® Ультра» форма выпуска 2 или другие рекомендуемые наборы (см. п. 6.2).

Таблица 7

Объемы реагентов и исследуемых образцов при использовании формы выпуска 4

Реагент / образец	Объем	Добавлять
При экстракции из 100 мкл образца		
Исследуемый образец	100 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В Lyo (восстановленный)	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	100 мкл	в пробирку для ОКО
ПКО-2 HCV Lyo (восстановленный)	10 мкл + 90 мкл ОКО	в пробирку для ПКО
Реагент, используемый для элюции РНК	50 ⁸ мкл	в каждую пробирку

⁸ При необходимости допускается увеличение объема элюции до 90 мкл.

Реагент / образец	Объем	Добавлять
При экстракции из 200 мкл образца		
Исследуемый образец	200 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В Lyo (восстановленный)	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	200 мкл	в пробирку для ОКО
ПКО-2 HCV Lyo (восстановленный)	10 мкл + 190 мкл ОКО	в пробирку для ПКО
Реагент, используемый для элюции РНК	100 мкл	в каждую пробирку
При экстракции из 1000 мкл образца		
Исследуемый образец	1000 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В Lyo (восстановленный)	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	1000 мкл	в пробирку для ОКО
ПКО-2 HCV Lyo (восстановленный)	10 мкл + 990 мкл ОКО	в пробирку для ПКО
Реагент, используемый для элюции РНК	100 мкл	в каждую пробирку

8.2. Подготовка реагентов для амплификации

8.2.1. При использовании формы выпуска 1

ВНИМАНИЕ! Компоненты реакционной смеси следует смешивать непосредственно перед проведением ОТ-ПЦР.

ВНИМАНИЕ! Необходимо минимизировать время нахождения Реагента TG, Taq полимеразы и Реввертазы R при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ! В случае приготовления реакционной смеси с помощью автоматической станции следуйте указаниям инструкции по ее использованию.

8.2.1.1. Рассчитать объемы реагентов, требующиеся для приготовления реакционной смеси (см. таблицу 8). Смесь готовить на общее число исследуемых и контрольных образцов плюс запас не менее чем на одну реакцию.

Таблица 8

Расчет объемов компонентов для одной реакционной смеси

Реагент	Объем, мкл	Обозначения
ПЦР-смесь HCV	$10 \cdot (N+1)$	N – количество амплифицируемых образцов, включая контроли
Буфер С	$5 \cdot (N+1)$	
Реагент TG	$0,25 \cdot (N+1)$	
Taq полимеразы	$1 \cdot (N+1)$	
Реввертаза R	$0,25 \cdot (N+1)$	

8.2.1.2. Разморозить реагенты. Перед смешиванием реагентов перемешать содержимое пробирок с реагентами, осадить капли на вортексе.

8.2.1.3. Приготовить реакционную смесь, добавив компоненты в объемах, рассчитанных в п. 8.2.1.1. Перемешать смесь и осадить капли на вортексе.

8.2.1.4. Отобрать необходимое количество пробирок или стрипов для проведения ОТ-ПЦР РНК исследуемых и контрольных образцов. Выбор пробирок для амплификации зависит от используемого амплификатора с системой детекции в режиме «реального времени».

8.2.1.5. Внести в пробирки по 15 мкл приготовленной реакционной смеси.

ВНИМАНИЕ! Неиспользованные остатки реакционной смеси хранению не подлежат.

8.2.2. При использовании формы выпуска 2 и 3

ВНИМАНИЕ! Компоненты реакционной смеси следует смешивать непосредственно перед проведением ОТ-ПЦР.

ВНИМАНИЕ! Необходимо минимизировать время нахождения Реагента TG, Taq полимеразы и Реввертазы R при комнатной температуре.

8.2.2.1. Рассчитать объемы реагентов, требующиеся для приготовления реакционной смеси (см. таблицу 9). Смесь готовить на общее число исследуемых и контрольных образцов плюс запас не менее чем на одну реакцию.

Таблица 9

Расчет объемов компонентов реакционной смеси

Реагент	Объем, мкл	Обозначения
Буфер D	$10 \cdot (N+1)$	N – количество амплифицируемых образцов, включая контроли
Реагент TG	$0,25 \cdot (N+1)$	
Taq полимеразы	$1 \cdot (N+1)$	
Реввертаза R	$0,25 \cdot (N+1)$	

8.2.2.2. Разморозить реагенты. Перед смешиванием реагентов перемешать содержимое пробирок с реагентами, осадить капли на вортексе.

8.2.2.3. Приготовить реакционную смесь, добавив компоненты в объемах, рассчитанных в п. 8.2.2.1. Перемешать смесь и осадить капли на вортексе.

8.2.2.4. Отобрать необходимое количество пробирок или стрипов с ПЦР-смесью HCV для проведения ОТ-ПЦР РНК исследуемых и контрольных образцов.

8.2.2.5. Убедиться, что парафин полностью покрывает раствор на дне пробирок. В противном случае, не использовать данные пробирки.

8.2.2.6. На поверхность парафина внести по 10 мкл приготовленной реакционной смеси, при этом она не должна проваливаться под прослойку парафина и смешиваться с ПЦР-смесью.

ВНИМАНИЕ! Неиспользованные остатки реакционной смеси хранению не подлежат.

8.2.3. При использовании формы выпуска 4

Отобрать необходимое количество стрипованных пробирок с ПЦР-смесью HCV Lyo для проведения ОТ-ПЦР РНК исследуемых и контрольных образцов.

8.3. Внесение проб РНК, проведение ОТ-ПЦР и детекции

ВНИМАНИЕ! При добавлении проб НК, экстрагированных с помощью наборов реагентов для проведения экстракции методом сорбции на силикагеле или магнитной сепарации, необходимо избегать попадания сорбента в реакционную смесь.

ВНИМАНИЕ! При ручном анализе программирование и запуск амплификатора проводить согласно инструкции по его применению. Рекомендуемые параметры для программирования амплификаторов указаны во вкладыше, прилагаемом к набору. При использовании программного обеспечения FRT Manager программирование амплификатора устанавливается автоматически.

8.3.1. Внести в подготовленные пробирки с реакционной смесью/лиофилизатом пробы РНК, полученные в результате экстракции из тестируемых и контрольных образцов, и отрицательный контроль ОТ-ПЦР – реагент К- или Разбавитель в соответствии с таблицей 10.

Образцы и их объемы для проведения амплификации

Объем тестируемого образца, мкл	Контрольный образец	Объем контрольного образца, мкл
При использовании форм выпуска 1, 2, 3		
10	ПКО-2 HCV	10
	ОКО	
	К-	
При использовании формы выпуска 4		
20	ПКО-2 HCV Lyo	20
	ОКО	
	Разбавитель	

ВНИМАНИЕ! Провести ОТ-ПЦР сразу после внесения НК-проб и контролей в реакционные смеси.

8.3.2. Запрограммировать амплификатор с системой детекции в режиме «реального времени» для выполнения единой программы амплификации и детекции флуоресцентного сигнала (см. таблицу 11).

Таблица 11

Единая программа амплификации и детекции флуоресцентного сигнала

Цикл	Температура, °C	Время	Детекция по каналам для флуорофоров	Количество циклов
1	50	15 мин	—	1
2	95	15 мин	—	1
3	95	10 с	—	45
	60	20 с	FAM, R6G	

8.3.3. Перед постановкой в амплификатор планшетного типа осадить капли со стенок пробирок на вортексе.

8.3.4. Установить пробирки или стрипы в ячейки реакционного модуля прибора.

8.3.5. Запустить выполнение программы амплификации с детекцией флуоресцентного сигнала.

8.3.6. Прибор проводит регистрацию флуоресцентного сигнала автоматически в режиме «реального времени».

8.4. Анализ и вычисление результатов

Анализ и обработку результатов можно проводить:

- в автоматическом режиме с использованием программного обеспечения FRT Manager (ООО «ИнтерЛабСервис», Россия, РУ № РЗН 2019/8870) согласно руководству пользователя, выбрав методику, указанную во вкладыше, прилагаемом к набору. Руководство пользователя размещено на официальном сайте ООО «ИнтерЛабСервис» по адресу: <https://www.interlabservice.ru/service/frt/>;

- в ручном режиме с помощью программного обеспечения прибора, используемого для проведения ПЦР с детекцией в режиме «реального времени», согласно инструкции по его применению и инструкции к набору.

ВНИМАНИЕ! При ручном анализе обработку данных (флуоресцентных кривых), полученных в программном обеспечении прибора, используемого для проведения ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени», проводить согласно инструкции по его применению. Рекомендуемые параметры для обработки данных указаны во вкладыше, прилагаемом к набору.

Обработка и расчет результатов происходит на основании наличия (или отсутствия) пересечения кривой флуоресценции S-образной (сигмообразной) формы с установленной на соответствующем уровне пороговой линией, что определяет наличие (или отсутствие) для данной пробы НК значения порогового цикла (Ct) в соответствующей графе таблицы результатов. Параметры обработки флуоресцентных кривых зависят от используемой модели амплификатора (см. вкладыш к набору и инструкцию по применению амплификатора).

Кривые накопления флуоресцентного сигнала анализируются по двум каналам детекции (см. таблицу 12).

Таблица 12

Детекция флуоресцентного сигнала

Канал для флуорофора	FAM	R6G
Продукт амплификации	ВКО	РНК HCV

8.5. Интерпретация результатов

Интерпретацию результатов проводят в двух вариантах:

- вручную в соответствии с таблицей 13 и вкладышем, прилагаемым к набору. Результат исследования считают достоверным, если результаты, полученные для контрольных образцов, соответствуют критериям валидности, указанным в таблице 14;

- в автоматическом режиме с использованием программного обеспечения FRT Manager (ООО «ИнтерЛабСервис», Россия, РУ № РЗН 2019/8870) согласно руководству пользователя, выбрав методику, указанную во вкладыше, прилагаемом к набору. Руководство пользователя размещено на официальном сайте ООО «ИнтерЛабСервис» по адресу: <https://www.interlabservice.ru/service/frt/>. Используемые в программном обеспечении алгоритм интерпретации результатов для исследуемых образцов и критерии валидности результатов, полученных для контролей, представлены в таблицах 13 и 14 соответственно.

Таблица 13

Интерпретация результатов для исследуемых образцов при проведении качественного анализа

Результат	Интерпретация
Значение Ct по каналам для флуорофоров FAM и R6G не определено или определено выше граничного ⁹ .	Невалидный! Сбой ВКО! Требуется повторить анализ
Значение Ct по каналу для флуорофора FAM определено не выше граничного, а по каналу для флуорофора R6G выше граничного.	Результат сомнительный
Значение Ct по каналу для флуорофора FAM определено не выше граничного, а по каналу для флуорофора R6G не определено.	РНК HCV не обнаружена
Значение Ct по каналу для флуорофора R6G определено не выше граничного. При этом кривая флуоресценции данной пробы по данному каналу пересекает пороговую линию на участке характерного экспоненциального подъема флуоресценции.	РНК HCV обнаружена

⁹ Граничные значения Ct указаны во вкладыше, прилагаемом к набору.

Критерии валидности для контрольных образцов

Контроль	Результаты амплификации по каналу для флуорофора	
	FAM	R6G
ОКО (отрицательный контроль экстракции)	Определено значение Ct не выше граничного ¹⁰	Значение Ct отсутствует
К- (отрицательный контроль ОТ-ПЦР)	Значение Ct отсутствует	
ПКО (положительный контроль экстракции РНК, ОТ-ПЦР)	Определено значение Ct не выше граничного	

8.6. Возможные ошибки и рекомендации по их решению

8.6.1. Для положительного контроля экстракции РНК и ОТ-ПЦР (ПКО) значение порогового цикла (Ct) по каналу для флуорофоров FAM и R6G отсутствует или превышает граничное значение. Необходимо повторить исследование для всех отрицательных и сомнительных образцов, начиная с этапа экстракции РНК.

8.6.2. Для отрицательного контроля экстракции (ОКО) по каналу для флуорофора R6G определено значение порогового цикла (Ct). Вероятна контаминация лаборатории продуктами амплификации или контаминация реагентов или исследуемых образцов на каком-либо этапе исследования. Необходимо предпринять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации и повторить исследование всех образцов, в которых обнаружена РНК выявляемого вируса, начиная с этапа экстракции НК.

8.6.3. Для отрицательного контроля ОТ-ПЦР (К-) по каналу для флуорофора FAM и/или R6G/HEX/JOE/VIC определено значение порогового цикла (Ct). Вероятна контаминация лаборатории продуктами амплификации или контаминация реагентов, исследуемых образцов на каком-либо этапе ПЦР-исследования. Необходимо предпринять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации и повторить исследование всех образцов, в которых обнаружена РНК выявляемого вируса, начиная с этапа амплификации НК.

8.6.4. Для исследуемого образца определено значение порогового цикла, при этом на графике флуоресценции отсутствует участок характерного экспоненциального подъема (график представляет собой приблизительно прямую линию). Необходимо проверить правильность выбранного уровня пороговой линии или параметров расчета базовой линии. Если результат получен при правильном уровне пороговой линии (базовой линии), требуется повторно провести амплификацию и детекцию для этого образца.

8.6.5. В случае получения невалидных или сомнительных результатов требуется повторное исследование образца, начиная с этапа экстракции НК. В случае воспроизводимого результата рекомендуется повторно провести взятие, предварительную подготовку и исследование образца.

8.7. Диагностическое значение полученного результата

ПЦР-исследование является одним из методов всестороннего обследования пациента, на основании которых лечащий врач устанавливает диагноз и выбирает мероприятия по лечению пациента. Результаты, полученные при использовании набора, следует рассматривать и интерпретировать в сочетании с данными других клинических и лабораторных исследований.

¹⁰ Граничные значения Ct указаны во вкладыше, прилагаемом к набору.

9. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

9.1. Предел обнаружения¹¹

Предел обнаружения набора «АмплиПрайм® HCV-тест» был определен с использованием пробит-анализа с 95%-ой доверительной вероятностью (см. таблицу 15).

Значения характеристики, указанные в таблице 15, достигаются при соблюдении правил, указанных в разделе «Исследуемый материал».

Таблица 15

Предел обнаружения набора

Объем биоматериала при экстракции, мкл	Предел обнаружения по Probit 95%, МЕ/мл	95%-ый доверительный интервал, МЕ/мл
100	100	98,8 – 115
200	50	42,5 – 59,4
1000	10	9,12 – 11,4

9.2. Аналитическая специфичность

Набор реагентов обнаруживает только фрагмент РНК вируса гепатита С (HCV).

Аналитическая специфичность набора «АмплиПрайм® HCV-тест» оценивалась тестированием НК микроорганизмов и вирусов (см. таблицу 16) и геномной ДНК человека. НК микроорганизмов и вирусов в концентрации не менее 1×10^6 копий/мл и геномную ДНК человека в концентрации 1 мкг/мл вносили в образцы биологического материала, не содержащие РНК HCV.

Таблица 16

Микроорганизмы и вирусы, используемые для оценки аналитической специфичности

Микроорганизмы и вирусы	
<i>Hepatitis B virus</i> (HBV)	<i>Herpes simplex virus I</i> (HSV I)
<i>Human immunodeficiency virus type 1</i> (HIV-1)	<i>Herpes simplex virus II</i> (HSV II)
<i>Human immunodeficiency virus type 2</i> (HIV-2)	<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Epstein-Barr virus</i> (EBV)	<i>Streptococcus pyogenes</i>
<i>Cytomegalovirus</i> (CMV)	<i>Streptococcus agalactiae</i>
<i>Human herpesvirus 6</i> (HHV6)	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
<i>Varicella Zoster virus</i> (VZV)	<i>Escherichia coli</i>

При тестировании образцов НК вышеперечисленных микроорганизмов и вирусов и геномной ДНК человека с использованием набора перекрестных реакций выявлено не было.

¹¹ Предел обнаружения – 95%-ое положительное пороговое значение концентрации (концентрация РНК выявляемого возбудителя, при которой 95% тестов дают положительный результат).

9.3. Воспроизводимость и повторяемость измерения

Воспроизводимость и повторяемость результатов с использованием набора реагентов оценивали путем тестирования модельных образцов. Модельные образцы были приготовлены путем контаминации образцов плазмы крови стандартным образцом предприятия, содержащим искусственно-синтезированную РНК HCV. Каждый образец проходил все этапы исследования (экстракцию НК, ОТ-ПЦР и детекцию результатов).

При оценке повторяемости коэффициент вариации, рассчитанный по результатам определения пороговых циклов (Ct), не превышал 5 %.

При оценке воспроизводимости коэффициент вариации, рассчитанный по результатам определения пороговых циклов (Ct), не превышал 10 %.

9.4. Диагностическая специфичность и диагностическая чувствительность

Для определения диагностической специфичности и диагностической чувствительности набора «АмплиПрайм® HCV-тест» были использованы 824 образцов плазмы крови.

В качестве набора сравнения, с помощью которого устанавливали наличие/отсутствие РНК HCV использовался набор реагентов «АмплиПрайм® HCV» (РУ № РЗН 2023/19534).

Результаты тестирования набора «АмплиПрайм® HCV-тест» в сравнении с наборами сравнения приведены в таблице 17.

Таблица 17

Результаты тестирования образцов биологического материала с помощью набора «АмплиПрайм® HCV-тест»

Исследуемые образцы		Результаты тестирования		
Тип	Количество	Образцы	Тестируемый набор	Набор сравнения
			АмплиПрайм® HCV-тест	АмплиПрайм® HCV
Плазма крови	824	Положительных	184	184
		Отрицательных	640	640

Значения диагностической специфичности и диагностической чувствительности набора «АмплиПрайм® HCV-тест» с доверительной вероятностью 95 %, рассчитанные, исходя из полученных данных, приведены в таблице 18.

Таблица 18

Диагностические характеристики набора реагентов «АмплиПрайм® HCV-тест»

Тип образцов	Диагностическая специфичность	Диагностическая чувствительность
Плазма крови	100 % (99,43 % – 100 %)	100 % (98,02 % – 100 %)

9.5. Оценка влияния интерферирующих веществ

Влияние интерферирующих веществ, потенциально содержащихся или присутствующих в исследуемом биоматериале, на эффективность ОТ-ПЦР при использовании набора «АмплиПрайм® HCV-тест» отсутствует. Не выявлено ингибирование реакции амплификации при добавлении к образцам биоматериала на этапе экстракции интерферирующих веществ, представленных в таблице 19, в максимально возможной концентрации.

**Интерферирующие вещества, использованные при тестировании набора
«АмплиПрайм® HCV-тест»**

Интерферент	Концентрация интерферента в образце
гемоглобин	200 мг/мл
иммуноглобулин G	16 мг/мл
лактоферрин	1 мкг/мл
билирубин	200 мг/мл
триглицериды	5000 - 30000 мг/мл
альбумин	50000 - 60000 мг/мл
ДНК человека	1×10 ⁸ копий/мл

10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАБОРА

10.1. Срок годности

Срок годности всех форм выпуска набора составляет 12 месяцев от даты изготовления. После вскрытия реагенты использовать согласно срокам, указанным в п.10.3. Набор с истекшим сроком годности применению не подлежит.

10.2. Транспортирование

10.2.1. Формы выпуска 1, 2, 3

Набор транспортировать при температуре от минус 24 до минус 16 °С всеми видами крытых транспортных средств в термоконтейнерах с хладоэлементами или в авторефрижераторах. Допускается транспортирование при температуре от 2 до 8 °С не более 5 суток.

Набор, транспортированный с нарушением указанного температурного режима, применению не подлежит.

10.2.2. Форма выпуска 4

Набор транспортировать при температуре от 2 до 8 °С всеми видами крытых транспортных средств в термоконтейнерах с хладоэлементами или в авторефрижераторах. Допускается транспортирование при температуре от 8 до 25 °С не более 3 суток.

Не допускается замораживание реагентов набора.

Набор, транспортированный с нарушением указанного температурного режима, применению не подлежит.

10.3. Хранение

10.3.1. Формы выпуска 1, 2, 3

Набор хранить при температуре от минус 24 до минус 16 °С в защищенном от света месте в течение всего срока годности набора.

Контрольные образцы (ПКО-2 HCV, ВКО В и ОКО) после разморозки хранить при температуре от 2 до 8 °С в течение 6 месяцев. Не допускается повторная заморозка контрольных образцов. Остальные реагенты после вскрытия хранить в тех же условиях, что и до вскрытия. Невскрытые и вскрытые реагенты стабильны в течение срока годности, указанного на этикетке, при соблюдении указанных условий хранения. Необходимо минимизировать время нахождения Реагента TG, Taq полимеразы и Ревертазы R при комнатной температуре.

Реакционная смесь, приготовленная из реагентов, хранению не подлежит.

Набор, хранившийся с нарушением указанного режима хранения, применению не подлежит.

10.3.2. Форма выпуска 4

Набор беречь от влаги. Хранить при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте в течение всего срока годности набора. ПЦР-смесь HCV Lyo хранить в пакете с силикагелем.

Восстановленные контрольные образцы (ПКО-2 HCV Lyo, ВКО В Lyo) хранить при температуре от 2 до 8 °С не более 3 месяцев.

Упаковку с лиофилизированными реагентами (ПКО-2 HCV Lyo, ВКО В Lyo) необходимо вскрывать непосредственно перед их восстановлением.

Реагенты после вскрытия хранить в тех же условиях, что и до вскрытия. Невскрытые и вскрытые реагенты (за исключением восстановленных) стабильны в течение срока годности, указанного на этикетке, при соблюдении указанных условий хранения. Не допускается замораживание реагентов набора.

Набор, хранившийся с нарушением указанного режима хранения, применению не подлежит.

11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует соответствие характеристик набора требованиям, указанным в технической и эксплуатационной документации, в течение указанного срока годности при соблюдении всех условий транспортирования, хранения и применения.

Рекламации на качество набора «АмплиПрайм® HCV-тест» направлять в адрес производителя ООО «НекстБио»: 111394, г. Москва, ул. Полимерная, 8 стр. 2, тел. (495) 620-08-73, e-mail: info@nextbio.ru.

При выявлении нежелательных реакций при использовании набора, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при обращении и эксплуатации набора, рекомендуется направить сообщение по адресу, указанному выше, и в уполномоченную государственную регулируемую организацию (в Российской Федерации – Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения) в соответствии с действующим законодательством.

Консультацию по работе с набором, а также по вопросам, касающимся качества набора, можно получить по контактам, указанным на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru.

12. СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Номер по каталогу



Код партии



Медицинское изделие для
диагностики *in vitro*



Содержимого достаточно для
проведения n-количества
тестов



Обратитесь к инструкции по
применению



Осторожно! Обратитесь к
инструкции по применению



Изготовитель



Дата изготовления



Использовать до



Температурный
диапазон



Не допускать
попадания солнечного
света



Беречь от влаги

Пронумеровано, скреплено и прошито
24 лист (а/ов)

Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»




М.Е. Сенина

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»

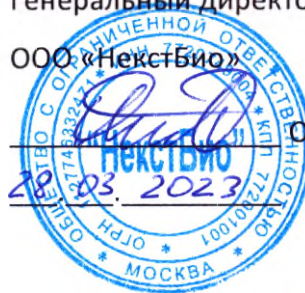

О. О. Лавинюков

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК ВИРУСА ГЕПАТИТА С (HCV)
МЕТОДОМ ОТ-ПЦР С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ
«РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» «АМПЛИПРАЙМ® HCV-ТЕСТ»
ПО ТУ 21.20.23-208-09286667-2023

Форма выпуска 1

Форма выпуска 2

Форма выпуска 3

Форма выпуска 4

Краткое руководство по применению версии 28.03.23-1

Лист утверждения

Краткое руководство

по применению набора реагентов для выявления
РНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР
с детекцией в режиме «реального времени»
«АмплиПрайм® HCV-тест»
по ТУ 21.20.23-208-09286667-2023

АмплиПрайм® HCV-тест

Форма выпуска 1

REF 2162-11

ООО «НекстБио», Россия, 111394,
г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, e-mail: info@nextbio.ru



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием набора реагентов необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению. Инструкция размещена в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru (для ее получения необходим доступ в интернет). Печатная версия инструкции доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

✓ плазма крови

СОСТАВ

Компонент	Описание	Объем, мл	Количество
ПЦР-смесь HCV	Прозрачная жидкость	0,6	2 пробирки
Буфер С	Прозрачная жидкость	0,3	2 пробирки
Реагент TG	Прозрачная жидкость	0,015	2 пробирки
Taq полимераза	Прозрачная жидкость	0,06	2 пробирки
Реввертаза R	Прозрачная жидкость	0,015	2 пробирки
ПКО-2 HCV	Прозрачная жидкость	0,025	4 пробирки
ВКО В	Прозрачная жидкость	0,6	2 пробирки
ОКО	Прозрачная жидкость	1,1	2 пробирки
К-	Прозрачная жидкость	0,3	2 пробирки
Набор реагентов рассчитан на проведение исследования 100 образцов, включая контроли.			

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Компонент	Формат
Набор реагентов	форма выпуска 1
Инструкция по применению	в электронном виде по адресу: www.nextbio.ru
Паспорт качества	в электронном виде по адресу: www.nextbio.ru
Краткое руководство	в бумажном виде
Комплект вкладышей	в бумажном виде

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения набора
Набор хранить при температуре от – 24 до – 16 °С в защищенном от света месте. Необходимо минимизировать время нахождения Реагента TG, Taq полимеразы и Реввертазы R при комнатной температуре. Контрольные образцы (ПКО-2 HCV, ВКО В и ОКО) после разморозки хранить при температуре от 2 до 8 °С в течение 6 месяцев. Не допускается повторная заморозка контрольных образцов.

ЭКСТРАКЦИЯ РНК ИЗ ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА

Для экстракции РНК использовать наборы реагентов, рекомендованные Производителем в инструкции по применению набора «АмплиПрайм® HCV-тест». Порядок работы с наборами для экстракции НК смотрите в инструкции по их применению.

ВНИМАНИЕ! Для экстракции из 100 мкл исследуемого образца используется комплект «АмплиПрайм РИБО-преп», из 200 или 1000 мкл – «МагноПрайм® Ультра» или другие наборы, рекомендуемые в инструкции по применению набора.

ВНИМАНИЕ! Реагент ВКО В вносится в каждую пробирку с исследуемыми и контрольными образцами (включая положительный и отрицательный контроли).

Объемы реагентов и исследуемых образцов, используемые при экстракции РНК с помощью рекомендуемых наборов реагентов, указаны в таблице ниже.

Добавляемый реагент / образец		
При экстракции из 100 мкл образца		
Исследуемые образцы	100 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	100 мкл	в пробирку для ОКО (отрицательного контроля)
ПКО-2 HCV	10 мкл + 90 мкл ОКО	в пробирку для ПКО (положительного контроля)
Реагент для элюции РНК	50 ¹ мкл	в каждую пробирку
При экстракции из 200 мкл образца		
Исследуемые образцы	200 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	200 мкл	в пробирку для ОКО (отрицательного контроля)
ПКО-2 HCV	10 мкл + 190 мкл ОКО	в пробирку для ПКО (положительного контроля)
Реагент для элюции РНК	100 мкл	в каждую пробирку
При экстракции из 1000 мкл образца		
Исследуемые образцы	1000 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	1000 мкл	в пробирку для ОКО (отрицательного контроля)
ПКО-2 HCV	10 мкл + 990 мкл ОКО	в пробирку для ПКО (положительного контроля)
Реагент для элюции РНК	100 мкл	в каждую пробирку

¹ При необходимости допускается увеличение объема элюции до 90 мкл.

ОТ-ПЦР С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»

ВНИМАНИЕ! Для внесения в пробирки реагентов, проб РНК и контрольных образцов использовать одноразовые наконечники с фильтрами.

1. Рассчитать объемы реагентов, необходимые для приготовления реакционной смеси, согласно таблице:

Компонент реакционной смеси	Объем, мкл	Обозначения
ПЦР-смесь HCV	$10 \cdot (N+1)$	N – количество амплифицируемых образцов, включая контроли
Буфер С	$5 \cdot (N+1)$	
Реагент TG	$0,25 \cdot (N+1)$	
Тақ полимеразы	$1 \cdot (N+1)$	
Реввертаза R	$0,25 \cdot (N+1)$	

ВНИМАНИЕ! В случае приготовления реакционной смеси с помощью автоматической станции следуйте указаниям инструкции по ее использованию.

ВНИМАНИЕ! Необходимо минимизировать время нахождения Реагента TG, Тақ полимеразы и Реввертазы R при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ! Компоненты реакционной смеси следует смешивать непосредственно перед проведением ОТ-ПЦР.

ВНИМАНИЕ! Неиспользованные остатки реакционной смеси хранению не подлежат.

2. Разморозить реагенты. Перед смешиванием реагентов перемешать содержимое пробирок с реагентами, осадить капли на вортке.
3. Приготовить реакционную смесь, добавив компоненты в объемах, рассчитанных в п. 1. Перемешать смесь и осадить капли на вортке.
4. Отобрать необходимое количество пробирок или стрипов для проведения ОТ-ПЦР РНК исследуемых и контрольных образцов. Выбор пробирок для амплификации зависит от используемого амплификатора с системой детекции в режиме «реального времени».
5. Внести в подготовленные пробирки реакционную смесь и образцы согласно таблице:

Добавляемый реагент / образец	
Внести по 15 мкл	
Приготовленной реакционной смеси	в пробирки для исследуемых и контрольных образцов
Внести по 10 мкл	
ВНИМАНИЕ! Избегать попадания сорбента в реакционную смесь.	
Пробы РНК, экстрагированной из исследуемого образца	в пробирки для исследуемых образцов
Пробы, экстрагированной из ОКО	в пробирку для образца ОКО (отрицательного контроля экстракции)
Реагент К–	в пробирку для образца К– (отрицательного контроля ОТ-ПЦР)
Пробы, экстрагированной из ПКО-2 HCV	в пробирку для образца ПКО (положительного контроля)

6. При ручном анализе запрограммировать амплификатор с системой детекции в режиме «реального времени» согласно инструкции по его применению для выполнения следующей программы:

Единая программа амплификации и детекции флуоресцентного сигнала

Цикл	Температура, °C	Время	Детекция по каналам для флуорофоров	Количество циклов
1	50	15 мин	–	1
2	95	15 мин	–	1
3	95	10 с	–	45
	60	20 с	FAM, R6G ²	

² Детекция сигнала для флуорофора R6G осуществляется по каналу детекции для аналогичных флуорофоров HEX, JOE, Yellow, VIC.

Примечание - Рекомендуемые параметры для программирования амплификаторов указаны во вкладыше, прилагаемом к набору.

ВНИМАНИЕ! При использовании программного обеспечения FRT Manager программирование амплификатора устанавливается автоматически.

7. Перед постановкой в амплификатор планшетного типа осадить капли со стенок пробирок на вортексе.
8. Установить пробирки или стрипы в ячейки реакционного модуля прибора.
9. Запустить выполнение программы амплификации с детекцией флуоресцентного сигнала согласно инструкции по применению используемого амплификатора.

АНАЛИЗ, ВЫЧИСЛЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВНИМАНИЕ! При ручном анализе обработку данных (флуоресцентных кривых), полученных в программном обеспечении прибора, используемого для проведения ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени», проводить согласно инструкции по его применению. Рекомендуемые параметры для обработки данных указаны во вкладыше, прилагаемом к набору.

Анализ, вычисление и интерпретацию результатов можно проводить:

- в автоматическом режиме с использованием программного обеспечения FRT Manager (ООО «ИнтерЛабСервис», Россия) согласно руководству пользователя, выбрав методику, указанную во вкладыше, прилагаемом к набору. Руководство пользователя размещено на официальном сайте ООО «ИнтерЛабСервис» по адресу: <https://www.interlabservice.ru/service/ft/>;

- в ручном режиме с помощью программного обеспечения прибора, используемого для проведения ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени», согласно инструкции по его применению и инструкции к набору.

Перед использованием набора реагентов необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению. Инструкция размещена в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru (для ее получения необходим доступ в интернет). Печатная версия инструкции доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73.

Краткое руководство

по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени»
«АмплиПрайм® HCV-тест»
по ТУ 21.20.23-208-09286667-2023

АмплиПрайм® HCV-тест

Форма выпуска 2

REF P2162-12

ООО «НекстБио», Россия, 111394,
г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, e-mail: info@nextbio.ru

IVD

СОСТАВ

Компонент	Описание	Объем, мл	Количество
ПЦР-смесь HCV	Прозрачная жидкость, раскапана под парафин белого цвета	0,01	100 пробирок (12,5 стрипов по 8 пробирок) ¹
Буфер D	Прозрачная жидкость	0,6	2 пробирки
Реагент TG	Прозрачная жидкость	0,015	2 пробирки
Taq полимеразы	Прозрачная жидкость	0,06	2 пробирки
Ревертаза R	Прозрачная жидкость	0,015	2 пробирки
ПКО-2 HCV	Прозрачная жидкость	0,025	4 пробирки
ВКО В	Прозрачная жидкость	0,6	2 пробирки
ОКО	Прозрачная жидкость	1,1	2 пробирки
К-	Прозрачная жидкость	0,3	2 пробирки
Набор реагентов рассчитан на проведение исследования 100 образцов, включая контроли.			

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Компонент	Формат
Набор реагентов	форма выпуска 2
Инструкция по применению	в электронном виде по адресу: www.nextbio.ru
Паспорт качества	в электронном виде по адресу: www.nextbio.ru
Краткое руководство	в бумажном виде
Комплект вкладышей	в бумажном виде

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения набора
Набор хранить при температуре от – 24 до – 16 °С в защищенном от света месте. Необходимо минимизировать время нахождения Реагента TG, Taq полимеразы и Ревертазы R при комнатной температуре. Контрольные образцы (ПКО-2 HCV, ВКО В и ОКО) после разморозки хранить при температуре от 2 до 8 °С в течение 6 месяцев. Не допускается повторная заморозка контрольных образцов.

¹ Пробирки с голубым парафином не используются.

ЭКСТРАКЦИЯ РНК ИЗ ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА

Для экстракции РНК использовать наборы реагентов, рекомендованные Производителем в инструкции по применению набора «АмплиПрайм® HCV-тест». Порядок работы с наборами для экстракции НК смотрите в инструкции по их применению.

ВНИМАНИЕ! Для экстракции из 100 мкл исследуемого образца используется комплект «АмплиПрайм РИБО-преп», из 200 или 1000 мкл – «МагноПрайм® Ультра» или другие наборы, рекомендуемые в инструкции по применению набора.

ВНИМАНИЕ! Реагент ВКО В вносится в каждую пробирку с исследуемыми и контрольными образцами (включая положительный и отрицательный контроли).

Объемы реагентов и исследуемых образцов, используемые при экстракции РНК с помощью рекомендуемых наборов реагентов, указаны в таблице ниже.

Добавляемый реагент / образец		
При экстракции из 100 мкл образца		
Исследуемые образцы	100 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	100 мкл	в пробирку для ОКО (отрицательного контроля)
ПКО-2 HCV	10 мкл + 90 мкл ОКО	в пробирку для ПКО (положительного контроля)
Реагент для элюции РНК	50 ² мкл	в каждую пробирку
При экстракции из 200 мкл образца		
Исследуемые образцы	200 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	200 мкл	в пробирку для ОКО (отрицательного контроля)
ПКО-2 HCV	10 мкл + 190 мкл ОКО	в пробирку для ПКО (положительного контроля)
Реагент для элюции РНК	100 мкл	в каждую пробирку
При экстракции из 1000 мкл образца		
Исследуемые образцы	1000 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	1000 мкл	в пробирку для ОКО (отрицательного контроля)
ПКО-2 HCV	10 мкл + 990 мкл ОКО	в пробирку для ПКО (положительного контроля)
Реагент для элюции РНК	100 мкл	в каждую пробирку

² При необходимости допускается увеличение объема элюции до 90 мкл.

ОТ-ПЦР С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»

ВНИМАНИЕ! Для внесения в пробирки реагентов, проб РНК и контрольных образцов использовать одноразовые наконечники с фильтрами.

1. Рассчитать объемы реагентов, необходимые для приготовления реакционной смеси, согласно таблице:

Компонент реакционной смеси	Объем, мкл	Обозначения
Буфер D	$10 \cdot (N+1)$	N – количество амплифицируемых образцов, включая контроли
Реагент TG	$0,25 \cdot (N+1)$	
Taq полимеразы	$1 \cdot (N+1)$	
Ревертаза R	$0,25 \cdot (N+1)$	

ВНИМАНИЕ! Необходимо минимизировать время нахождения Реагента TG, Taq полимеразы и Ревертазы R при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ! Компоненты реакционной смеси следует смешивать непосредственно перед проведением ОТ-ПЦР.

ВНИМАНИЕ! Неиспользованные остатки реакционной смеси хранению не подлежат.

2. Разморозить реагенты. Перед смешиванием реагентов перемешать содержимое пробирок с реагентами, осадить капли на вихре.
3. Приготовить реакционную смесь, добавив компоненты в объемах, рассчитанных в п. 1. Перемешать смесь и осадить капли на вихре.
4. Отобрать необходимое количество стрипованных пробирок с ПЦР-смесью HCV для проведения ОТ-ПЦР РНК исследуемых и контрольных образцов.
5. Убедиться, что парафин полностью покрывает раствор на дне пробирок. В противном случае, не использовать данные пробирки.
6. Внести в подготовленные пробирки реакционную смесь и образцы согласно таблице:

Добавляемый реагент / образец	
Внести по 10 мкл	
Приготовленной реакционной смеси	в пробирки с ПЦР-смесью HCV на поверхность парафина ВНИМАНИЕ! Реакционная смесь не должна проваливаться под парафин.
Внести по 10 мкл	
ВНИМАНИЕ! Избегать попадания сорбента в реакционную смесь.	
Пробы РНК, экстрагированной из исследуемого образца	в пробирки для исследуемых образцов
Пробы, экстрагированной из ОКО	в пробирку для образца ОКО (отрицательного контроля экстракции)
Реагент К–	в пробирку для образца К– (отрицательного контроля ОТ-ПЦР)
Пробы, экстрагированной из ПКО-2 HCV	в пробирку для образца ПКО (положительного контроля)

7. При ручном анализе запрограммировать амплификатор с системой детекции в режиме «реального времени» согласно инструкции по его применению для выполнения следующей программы:

Единая программа амплификации и детекции флуоресцентного сигнала

Цикл	Температура, °C	Время	Детекция по каналам для флуорофоров	Количество циклов
1	50	15 мин	–	1
2	95	15 мин	–	1
3	95	10 с	–	45
	60	20 с	FAM, R6G ³	

³ Детекция сигнала для флуорофора R6G осуществляется по каналу детекции для аналогичных флуорофоров HEX, JOE, Yellow, VIC.

Примечание - Рекомендуемые параметры для программирования амплификаторов указаны во вкладыше, прилагаемом к набору.

ВНИМАНИЕ! При использовании программного обеспечения FRT Manager программирование амплификатора устанавливается автоматически.

8. Перед постановкой в амплификатор планшетного типа осадить капли со стенок пробирок на вортексе.
9. Установить стрипы в ячейки реакционного модуля прибора.
10. Запустить выполнение программы амплификации с детекцией флуоресцентного сигнала согласно инструкции по применению используемого амплификатора.

АНАЛИЗ, ВЫЧИСЛЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВНИМАНИЕ! При ручном анализе обработку данных (флуоресцентных кривых), полученных в программном обеспечении прибора, используемого для проведения ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени», проводить согласно инструкции по его применению. Рекомендуемые параметры для обработки данных указаны во вкладыше, прилагаемом к набору.

Анализ, вычисление и интерпретацию результатов можно проводить:

- в автоматическом режиме с использованием программного обеспечения FRT Manager (ООО «ИнтерЛабСервис», Россия) согласно руководству пользователя, выбрав методику, указанную во вкладыше, прилагаемом к набору. Руководство пользователя размещено на официальном сайте ООО «ИнтерЛабСервис» по адресу: <https://www.interlabservice.ru/service/frt/>;

- в ручном режиме с помощью программного обеспечения прибора, используемого для проведения ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени», согласно инструкции по его применению и инструкции к набору.



Краткое руководство

по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени»

«АмплиПрайм® HCV-тест»
по ТУ 21.20.23-208-09286667-2023

АмплиПрайм® HCV-тест

Форма выпуска 3

REF P2162-13

ООО «НекстБио», Россия, 111394,
г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, e-mail: info@nextbio.ru

IVD

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием набора реагентов необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению. Инструкция размещена в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru (для ее получения необходим доступ в интернет). Печатная версия инструкции доступна по запросу по телефону (495) 620-08-73.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

✓ плазма крови

СОСТАВ

Компонент	Описание	Объем, мл	Количество
ПЦР-смесь HCV	Прозрачная жидкость, раскапана под парафин	0,01	100 пробирок
Буфер D	Прозрачная жидкость	0,6	2 пробирки
Реагент TG	Прозрачная жидкость	0,015	2 пробирки
Taq полимеразы	Прозрачная жидкость	0,06	2 пробирки
Ревертаза R	Прозрачная жидкость	0,015	2 пробирки
ПКО-2 HCV	Прозрачная жидкость	0,025	4 пробирки
ВКО В	Прозрачная жидкость	0,6	2 пробирки
ОКО	Прозрачная жидкость	1,1	2 пробирки
К-	Прозрачная жидкость	0,3	2 пробирки
Набор реагентов рассчитан на проведение исследования 100 образцов, включая контроли.			

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Компонент	Формат
Набор реагентов	форма выпуска 3
Инструкция по применению	в электронном виде по адресу: www.nextbio.ru
Паспорт качества	в электронном виде по адресу: www.nextbio.ru
Краткое руководство	в бумажном виде
Комплект вкладышей	в бумажном виде

ХРАНИЕНИЕ

Условия хранения набора
Набор хранить при температуре от – 24 до – 16 °С в защищенном от света месте. Необходимо минимизировать время нахождения Реагента TG, Taq полимеразы и Ревертазы R при комнатной температуре. Контрольные образцы (ПКО-2 HCV, ВКО В и ОКО) после разморозки хранить при температуре от 2 до 8 °С в течение 6 месяцев. Не допускается повторная заморозка контрольных образцов.

ЭКСТРАКЦИЯ РНК ИЗ ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА

Для экстракции РНК использовать наборы реагентов, рекомендованные Производителем в инструкции по применению набора «АмплиПрайм® HCV-тест». Порядок работы с наборами для экстракции НК смотрите в инструкции по их применению.

ВНИМАНИЕ! Для экстракции из 100 мкл исследуемого образца используется комплект «АмплиПрайм РИБО-преп», из 200 или 1000 мкл – «МагноПрайм® Ультра» или другие наборы, рекомендуемые в инструкции по применению набора.

ВНИМАНИЕ! Реагент ВКО В вносится в каждую пробирку с исследуемыми и контрольными образцами (включая положительный и отрицательный контроли).

Объемы реагентов и исследуемых образцов, используемые при экстракции РНК с помощью рекомендуемых наборов реагентов, указаны в таблице ниже.

Добавляемый реагент / образец		
При экстракции из 100 мкл образца		
Исследуемые образцы	100 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	100 мкл	в пробирку для ОКО (отрицательного контроля)
ПКО-2 HCV	10 мкл + 90 мкл ОКО	в пробирку для ПКО (положительного контроля)
Реагент для элюции РНК	50 ¹ мкл	в каждую пробирку
При экстракции из 200 мкл образца		
Исследуемые образцы	200 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	200 мкл	в пробирку для ОКО (отрицательного контроля)
ПКО-2 HCV	10 мкл + 190 мкл ОКО	в пробирку для ПКО (положительного контроля)
Реагент для элюции РНК	100 мкл	в каждую пробирку
При экстракции из 1000 мкл образца		
Исследуемые образцы	1000 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	1000 мкл	в пробирку для ОКО (отрицательного контроля)
ПКО-2 HCV	10 мкл + 990 мкл ОКО	в пробирку для ПКО (положительного контроля)
Реагент для элюции РНК	100 мкл	в каждую пробирку

¹ При необходимости допускается увеличение объема элюции до 90 мкл.

ОТ-ПЦР С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»

ВНИМАНИЕ! Для внесения в пробирки реагентов, проб РНК и контрольных образцов использовать одноразовые наконечники с фильтрами.

1. Рассчитать объемы реагентов, необходимые для приготовления реакционной смеси, согласно таблице:

Компонент реакционной смеси	Объем, мкл	Обозначения
Буфер D	$10 \cdot (N+1)$	N – количество амплифицируемых образцов, включая контроли
Реагент TG	$0,25 \cdot (N+1)$	
Taq полимеразы	$1 \cdot (N+1)$	
Ревертаза R	$0,25 \cdot (N+1)$	

ВНИМАНИЕ! Необходимо минимизировать время нахождения Реагента TG, Taq полимеразы и Ревертазы R при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ! Компоненты реакционной смеси следует смешивать непосредственно перед проведением ОТ-ПЦР.

ВНИМАНИЕ! Неиспользованные остатки реакционной смеси хранению не подлежат.

2. Разморозить реагенты. Перед смешиванием реагентов перемешать содержимое пробирок с реагентами, осадить капли на вортексе.
3. Приготовить реакционную смесь, добавив компоненты в объемах, рассчитанных в п. 1. Перемешать смесь и осадить капли на вортексе.
4. Отобрать необходимое количество пробирок с ПЦР-смесью HCV для проведения ОТ-ПЦР РНК исследуемых и контрольных образцов.
5. Убедиться, что парафин полностью покрывает раствор на дне пробирок. В противном случае, не использовать данные пробирки.
6. Внести в подготовленные пробирки реакционную смесь и образцы согласно таблице:

Добавляемый реагент / образец	
Внести по 10 мкл	
Приготовленной реакционной смеси	в пробирки с ПЦР-смесью HCV на поверхность парафина ВНИМАНИЕ! Реакционная смесь не должна проваливаться под парафин.
Внести по 10 мкл	
ВНИМАНИЕ! Избегать попадания сорбента в реакционную смесь.	
Пробы РНК, экстрагированной из исследуемого образца	в пробирки для исследуемых образцов
Пробы, экстрагированной из ОКО	в пробирку для образца ОКО (отрицательного контроля экстракции)
Реагент К–	в пробирку для образца К– (отрицательного контроля ОТ-ПЦР)
Пробы, экстрагированной из ПКО-2 HCV	в пробирку для образца ПКО (положительного контроля)

7. При ручном анализе запрограммировать амплификатор с системой детекции в режиме «реального времени» согласно инструкции по его применению для выполнения следующей программы:

Единая программа амплификации и детекции флуоресцентного сигнала

Цикл	Температура, °C	Время	Детекция по каналам для флуорофоров	Количество циклов
1	50	15 мин	–	1
2	95	15 мин	–	1
3	95	10 с	–	45
	60	20 с	FAM, R6G ²	

² Детекция сигнала для флуорофора R6G осуществляется по каналу детекции для аналогичных флуорофоров HEX, JOE, Yellow, VIC.



Примечание - Рекомендуемые параметры для программирования амплификаторов указаны во вкладыше, прилагаемом к набору.

ВНИМАНИЕ! При использовании программного обеспечения FRT Manager программирование амплификатора устанавливается автоматически.

8. Перед постановкой в амплификатор планшетного типа осадить капли со стенок пробирок на вортесе.
9. Установить пробирки в ячейки реакционного модуля прибора.
10. Запустить выполнение программы амплификации с детекцией флуоресцентного сигнала согласно инструкции по применению используемого амплификатора.

АНАЛИЗ, ВЫЧИСЛЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВНИМАНИЕ! При ручном анализе обработку данных (флуоресцентных кривых), полученных в программном обеспечении прибора, используемого для проведения ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени», проводить согласно инструкции по его применению. Рекомендуемые параметры для обработки данных указаны во вкладыше, прилагаемом к набору.

Анализ, вычисление и интерпретацию результатов можно проводить:

- в автоматическом режиме с использованием программного обеспечения FRT Manager (ООО «ИнтерЛабСервис», Россия) согласно руководству пользователя, выбрав методику, указанную во вкладыше, прилагаемом к набору. Руководство пользователя размещено на официальном сайте ООО «ИнтерЛабСервис» по адресу: <https://www.interlabservice.ru/service/frt/>;

- в ручном режиме с помощью программного обеспечения прибора, используемого для проведения ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени», согласно инструкции по его применению и инструкции к набору.

Краткое руководство

по применению набора реагентов для выявления
РНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР
с детекцией в режиме «реального времени»
«АмплиПрайм® HCV-тест»
по ТУ 21.20.23-208-09286667-2023

АмплиПрайм® HCV-тест

Форма выпуска 4

REF 2162-14

ООО «НекстБио», Россия, 111394,
г. Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2
тел. (495) 620-08-73, e-mail: info@nextbio.ru

IVD

СОСТАВ

Компонент	Описание	Объем, мл	Количество
ПЦР-смесь HCV Lyo	Лиофилизат белого цвета	-	96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок)
ПКО-2 HCV Lyo	Лиофилизат белого цвета	-	4 пробирки
ВКО В Lyo	Лиофилизат белого цвета	-	2 пробирки
ОКО	Прозрачная жидкость	1,1	2 пробирки
Разбавитель	Прозрачная жидкость	1,2	2 пробирки

Набор реагентов рассчитан на проведение исследования
96 образцов, включая контроли.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Компонент	Формат
Набор реагентов	форма выпуска 4
Инструкция по применению	в электронном виде по адресу: www.nextbio.ru
Паспорт качества	в электронном виде по адресу: www.nextbio.ru
Краткое руководство	в бумажном виде
Комплект вкладышей	в бумажном виде

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения набора
Набор беречь от влаги. Хранить при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Восстановленные контрольные образцы (ПКО-2 HCV Lyo, ВКО В Lyo) хранить при температуре от 2 до 8 °С не более 3 месяцев. ПЦР-смесь HCV Lyo хранить в пакете с силикагелем. Упаковку с лиофилизированными реагентами необходимо вскрывать непосредственно перед их восстановлением. Не допускается замораживание реагентов набора.

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием набора реагентов
необходимо ознакомиться с инструкцией по его
применению. Инструкция размещена в электронном
виде на официальном сайте Производителя:
www.nextbio.ru (для ее получения необходим доступ
в интернет). Печатная версия инструкции доступна по
запросу по телефону (495) 620-08-73.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

✓ плазма крови

ЭКСТРАКЦИЯ РНК ИЗ ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА

Для экстракции РНК использовать наборы реагентов, рекомендованные Производителем в инструкции по применению набора «АмплиПрайм® HCV-тест». Порядок работы с наборами для экстракции НК смотрите в инструкции по их применению.

ВНИМАНИЕ! Для экстракции из 100 мкл исследуемого образца используется комплект «АмплиПрайм РИБО-преп», из 200 или 1000 мкл – «МагноПрайм® Ультра» или другие наборы, рекомендуемые в инструкции по применению набора.

ВНИМАНИЕ! Реагент ВКО В Lyo вносится в каждую пробирку с исследуемыми и контрольными образцами (включая положительный и отрицательный контроли).

ВНИМАНИЕ! Реагенты ПКО-2 HCV Lyo и ВКО В Lyo требуют восстановления.

Для восстановления лиофилизированных реагентов необходимо в пробирку с лиофилизатом добавить Разбавитель в объеме, указанном в таблице ниже.

Реагент	Разбавитель, мкл
ПКО-2 HCV Lyo	25
ВКО В Lyo	600

Объемы реагентов и исследуемых образцов, используемые при экстракции РНК с помощью рекомендуемых наборов реагентов, указаны в таблице ниже.

Добавляемый реагент / образец		
При экстракции из 100 мкл образца		
Исследуемые образцы	100 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В Lyo (восстановленный)	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	100 мкл	в пробирку для ОКО (отрицательного контроля)
ПКО-2 HCV Lyo (восстановленный)	10 мкл + 90 мкл ОКО	в пробирку для ПКО (положительного контроля)
Реагент для элюции РНК	50 ¹ мкл	в каждую пробирку
При экстракции из 200 мкл образца		
Исследуемые образцы	200 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В Lyo (восстановленный)	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	200 мкл	в пробирку для ОКО (отрицательного контроля)
ПКО-2 HCV Lyo (восстановленный)	10 мкл + 190 мкл ОКО	в пробирку для ПКО (положительного контроля)
Реагент для элюции РНК	100 мкл	в каждую пробирку
При экстракции из 1000 мкл образца		
Исследуемые образцы	1000 мкл	в пробирки для исследуемых образцов
ВКО В Lyo (восстановленный)	10 мкл	в каждую пробирку
ОКО	1000 мкл	в пробирку для ОКО (отрицательного контроля)
ПКО-2 HCV Lyo (восстановленный)	10 мкл + 990 мкл ОКО	в пробирку для ПКО (положительного контроля)
Реагент для элюции РНК	100 мкл	в каждую пробирку

¹ При необходимости допускается увеличение объема элюции до 90 мкл.

ОТ-ПЦР С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»

ВНИМАНИЕ! Для внесения в пробирки реагентов, проб РНК и контрольных образцов использовать одноразовые наконечники с фильтрами.

1. Отобрать необходимое количество стрипованных пробирок с ПЦР-смесью HCV Lyo для проведения ОТ-ПЦР РНК исследуемых и контрольных образцов.
2. Внести в пробирки с ПЦР-смесью HCV Lyo образцы согласно таблице:

Добавляемый реагент / образец	
Внести по 20 мкл	
ВНИМАНИЕ! Избегать попадания сорбента в реакционную смесь.	
Пробы РНК, экстрагированной из исследуемого образца	в пробирки для исследуемых образцов
Пробы, экстрагированной из ОКО	в пробирку для образца ОКО (отрицательного контроля экстракции)
Разбавитель	в пробирку для образца К– (отрицательного контроля ОТ-ПЦР)
Пробы, экстрагированной из ПКО-2 HCV Lyo	в пробирку для образца ПКО (положительного контроля)

3. При ручном анализе запрограммировать амплификатор с системой детекции в режиме «реального времени» согласно инструкции по его применению для выполнения следующей программы:

Единая программа амплификации и детекции флуоресцентного сигнала

Цикл	Температура, °C	Время	Детекция по каналам для флуорофоров	Количество циклов
1	50	15 мин	–	1
2	95	15 мин	–	1
3	95	10 с	–	45
	60	20 с	FAM, R6G ²	

Примечание - Рекомендуемые параметры для программирования амплификаторов указаны во вкладыше, прилагаемом к набору.

ВНИМАНИЕ! При использовании программного обеспечения FRT Manager программирование амплификатора устанавливается автоматически.

4. Перед постановкой в амплификатор планшетного типа осадить капли со стенок пробирок на вортексе.
5. Установить стрипы в ячейки реакционного модуля прибора.
6. Запустить выполнение программы амплификации с детекцией флуоресцентного сигнала согласно инструкции по применению используемого амплификатора.

² Детекция сигнала для флуорофора R6G осуществляется по каналу детекции для аналогичных флуорофоров HEX, JOE, Yellow, VIC.

АНАЛИЗ, ВЫЧИСЛЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВНИМАНИЕ! При ручном анализе обработки данных (флуоресцентных кривых), полученных в программном обеспечении прибора, используемого для проведения ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени», проводить согласно инструкции по его применению. Рекомендуемые параметры для обработки данных указаны во вкладыше, прилагаемом к набору.

Анализ, вычисление и интерпретацию результатов можно проводить:

- в автоматическом режиме с использованием программного обеспечения FRT Manager (ООО «ИнтерЛабСервис», Россия) согласно руководству пользователя, выбрав методику, указанную во вкладыше, прилагаемом к набору. Руководство пользователя размещено на официальном сайте ООО «ИнтерЛабСервис» по адресу: <https://www.interlabservice.ru/service/frt/>;
- в ручном режиме с помощью программного обеспечения прибора, используемого для проведения ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени», согласно инструкции по его применению и инструкции к набору.

Пронумеровано, скреплено и прошито
17 лист (а/ов)



Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»
О.О. Лавинюков



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



О. О. Лавинюков

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК ВИРУСА ГЕПАТИТА С (HCV)
МЕТОДОМ ОТ-ПЦР С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ
«РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» «АМПЛИПРАЙМ® HCV-ТЕСТ»
ПО ТУ 21.20.23-208-09286667-2023

Комплект вкладышей

Лист утверждения



ВКЛАДЫШ¹

АмплиПрайм® HCV-тест

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® HCV-тест» по ТУ 21.20.23-208-09286667-2023

ФОРМА ВЫПУСКА X	REF	X	LOT	X
-----------------	------------	---	------------	---

1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПРИБОРОВ РОТОРНОГО ТИПА

Канал	Calibrate/Gain Optimisation.../Опт.уровня сигн.	Threshold/Порог	More Settings/Outlier Removal/Устранение выбросов	Slope Correct/Коррект. уклона	Динамический фон	Исключить циклы
FAM/Green	от 5 FI до 10 FI	0,07	5 – 10 %	включена	включен	от 1 до 5
JOE/Yellow	от 5 FI до 10 FI	0,07	5 – 10 %	включена	включен	от 1 до 5

2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПРИБОРОВ ПЛАНШЕТНОГО ТИПА

2.1. Общие настройки

Канал	Threshold / Порог	Исключить циклы
FAM	Пороговая линия для каждого канала устанавливается на уровне, соответствующем 10 – 20 % от максимального уровня флуоресценции, полученного для контрольного образца ПКО-2 HCV / ПКО-2 HCV Lyo в последнем цикле амплификации.	от 1 до 5
R6G		от 1 до 5

2.2. Настройки для прибора «CFX96»

Параметр	Шаг этапа циклирования	Ramp Rate
Step Options	95 °C	2,5 °C/sec
	60 °C	2,5 °C/sec

2.3. Настройки для прибора «ДТпрайм»

Метод	Тип анализа	Канал	Критерий положительного результата ПЦР
Пороговый (Ct)	Ct (Cp) для всех каналов	FAM, R6G	70 %

3. ГРАНИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОРОГОВОГО ЦИКЛА (Ct)

Образец	Канал для флуорофора / мишень	Граничное значение Ct	
		Прибор роторного типа	Прибор планшетного типа
Исследуемые образцы	FAM / ВКО	≤ 32,5	≤ 35
	R6G / Вирус гепатита С	≤ 45	≤ 45
ОКО	FAM	≤ 32,5	≤ 35
ПКО (ПКО-2 HCV / ПКО-2 HCV Lyo)	FAM	≤ 32,5	≤ 35
	R6G	≤ 30	≤ 33,5



ВКЛАДЫШ²

для автоматической обработки результатов к набору «АмплиПрайм® HCV-тест»

Группа совместимости: X

Кат. №: X

Серия: X

Срок годности до: ГГГГ-ММ-ДД

Методика: X

Группа совместимости: X

Прибор: X

Штрих-код:

Поле для штрих-кода

Пронумеровано, скреплено и прошито
3 лист (а/ов)



Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио» О.О. Лавинюков



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НекстБио»



О. О. Лавинюков

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК ВИРУСА ГЕПАТИТА С (HCV)
МЕТОДОМ ОТ-ПЦР С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ»
«АМПЛИПРАЙМ® HCV-ТЕСТ»
ПО ТУ 21.20.23-208-09286667-2023

Форма выпуска 1

Форма выпуска 2

Форма выпуска 3

Форма выпуска 4

Шаблон паспорта качества

Лист утверждения

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ номер лота/2162-11

АмплиПрайм® HCV-тест Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® HCV-тест» по ТУ 21.20.23-208-09286667-2023		x
		гггг-мм-дд
ФОРМА ВЫПУСКА 1		гггг-мм-дд

Контроль качества проведен по ТУ 21.20.23-208-09286667-2023.

1. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА НАБОРА

Упаковка и маркировка набора указанной серии соответствуют требованиям ТУ 21.20.23-208-09286667-2023.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Компонент	Характеристика	Норма	Результаты контроля
Набор реагентов «АмплиПрайм® HCV-тест»	форма выпуска 1	в наличии	соответствует
Инструкция по применению набора	в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru	в наличии	соответствует
Краткое руководство по применению набора	в бумажном виде	в наличии	соответствует
Комплект вкладышей	в бумажном виде	в наличии	соответствует
Паспорт качества	в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru	в наличии	соответствует

3. СОСТАВ НАБОРА И ВНЕШНИЙ ВИД КОМПОНЕНТОВ

Компонент	Норма	Результаты контроля
ПЦР-смесь HCV	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
Буфер С	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
Реагент TG	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
Тaq полимераза	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
Ревертаза R	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
ПКО-2 HCV	4 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
ВКО В	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
ОКО	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
К-	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА¹

Показатель	Норма	Результаты контроля
Предел обнаружения		
Выявление РНК HCV при исследовании разведений стандартного образца предприятия «СОП 125-22 РНК HCV» до концентраций 250 МЕ/мл и 50 МЕ/мл	РНК HCV обнаружена.	соответствует

Результаты тестирования исследуемых образцов и контролей исследования соответствуют критериям валидности, указанным в инструкции по применению набора.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Условия транспортирования	Условия хранения
Набор транспортировать при температуре от – 24 до – 16 °С. Допускается транспортирование при температуре от 2 до 8 °С не более 5 суток.	Набор хранить при температуре от – 24 до – 16 °С в защищенном от света месте. Контрольные образцы (ПКО-2 HCV, ВКО В и ОКО) после разморозки хранить при температуре от 2 до 8 °С в течение 6 месяцев. Не допускается повторная заморозка контрольных образцов.

Дата выдачи паспорта XX.XX.XX

Должность

печать подразделения

подпись (расшифровка)

¹ Тестируются при экстракции из 200 мкл образца.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ номер лота/P2162-12

АмплиПрайм® HCV-тест Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® HCV-тест» по ТУ 21.20.23-208-09286667-2023	LOT	x
		ГГГГ-ММ-ДД
		ГГГГ-ММ-ДД
ФОРМА ВЫПУСКА 2		

Контроль качества проведен по ТУ 21.20.23-208-09286667-2023.

1. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА НАБОРА

Упаковка и маркировка набора указанной серии соответствуют требованиям ТУ 21.20.23-208-09286667-2023.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Компонент	Характеристика	Норма	Результаты контроля
Набор реагентов «АмплиПрайм® HCV-тест»	форма выпуска 2	в наличии	соответствует
Инструкция по применению набора	в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru	в наличии	соответствует
Краткое руководство по применению набора	в бумажном виде	в наличии	соответствует
Комплект вкладышей	в бумажном виде	в наличии	соответствует
Паспорт качества	в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru	в наличии	соответствует

3. СОСТАВ НАБОРА И ВНЕШНИЙ ВИД КОМПОНЕНТОВ

Компонент	Норма	Результаты контроля
ПЦР-смесь HCV	100 пробирок (12,5 стрипов по 8 пробирок). Прозрачная жидкость, раскапана под парафин белого цвета.	соответствует
Буфер D	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
Реагент TG	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
Тақ полимераза	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
Ревертаза R	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
ПКО-2 HCV	4 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
ВКО В	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
ОКО	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
К-	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА¹

Показатель	Норма	Результаты контроля
Предел обнаружения		
Выявление РНК HCV при исследовании разведений стандартного образца предприятия «СОП 125-22 РНК HCV» до концентраций 250 МЕ/мл и 50 МЕ/мл	РНК HCV обнаружена.	соответствует

Результаты тестирования исследуемых образцов и контролей исследования соответствуют критериям валидности, указанным в инструкции по применению набора.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Условия транспортирования	Условия хранения
Набор транспортировать при температуре от – 24 до – 16 °С. Допускается транспортирование при температуре от 2 до 8 °С не более 5 суток.	Набор хранить при температуре от – 24 до – 16 °С в защищенном от света месте. Контрольные образцы (ПКО-2 HCV, ВКО В и ОКО) после разморозки хранить при температуре от 2 до 8 °С в течение 6 месяцев. Не допускается повторная заморозка контрольных образцов.

Дата выдачи паспорта XX.XX.XX

Должность

печать подразделения

подпись (расшифровка)

¹ Тестируются при экстракции из 200 мкл образца.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ номер лота/P2162-13

АмплиПрайм® HCV-тест Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® HCV-тест» по ТУ 21.20.23-208-09286667-2023		x
		гггг-мм-дд
ФОРМА ВЫПУСКА 3		гггг-мм-дд

Контроль качества проведен по ТУ 21.20.23-208-09286667-2023.

1. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА НАБОРА

Упаковка и маркировка набора указанной серии соответствуют требованиям ТУ 21.20.23-208-09286667-2023.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Компонент	Характеристика	Норма	Результаты контроля
Набор реагентов «АмплиПрайм® HCV-тест»	форма выпуска 3	в наличии	соответствует
Инструкция по применению набора	в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru	в наличии	соответствует
Краткое руководство по применению набора	в бумажном виде	в наличии	соответствует
Комплект вкладышей	в бумажном виде	в наличии	соответствует
Паспорт качества	в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru	в наличии	соответствует

3. СОСТАВ НАБОРА И ВНЕШНИЙ ВИД КОМПОНЕНТОВ

Компонент	Норма	Результаты контроля
ПЦР-смесь HCV	100 пробирок. Прозрачная жидкость, раскапана под парафин.	соответствует
Буфер D	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
Реагент TG	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
Taq полимераза	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
Реввертаза R	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
ПКО-2 HCV	4 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
ВКО В	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
ОКО	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
К-	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА¹

Показатель	Норма	Результаты контроля
Предел обнаружения		
Выявление РНК HCV при исследовании разведений стандартного образца предприятия «СОП 125-22 РНК HCV» до концентраций 250 МЕ/мл и 50 МЕ/мл	РНК HCV обнаружена.	соответствует

Результаты тестирования исследуемых образцов и контролей исследования соответствуют критериям валидности, указанным в инструкции по применению набора.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Условия транспортирования	Условия хранения
Набор транспортировать при температуре от – 24 до – 16 °С. Допускается транспортирование при температуре от 2 до 8 °С не более 5 суток.	Набор хранить при температуре от – 24 до – 16 °С в защищенном от света месте. Контрольные образцы (ПКО-2 HCV, ВКО В и ОКО) после разморозки хранить при температуре от 2 до 8 °С в течение 6 месяцев. Не допускается повторная заморозка контрольных образцов.

Дата выдачи паспорта XX.XX.XX

Должность

печать подразделения

подпись (расшифровка)

¹ Тестируются при экстракции из 200 мкл образца.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ номер лота/2162-14

АмплиПрайм® HCV-тест Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) методом ОТ-ПЦР с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® HCV-тест» по ТУ 21.20.23-208-09286667-2023		x
		гггг-мм-дд
ФОРМА ВЫПУСКА 4		гггг-мм-дд

Контроль качества проведен по ТУ 21.20.23-208-09286667-2023.

1. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА НАБОРА

Упаковка и маркировка набора указанной серии соответствуют требованиям ТУ 21.20.23-208-09286667-2023.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Компонент	Характеристика	Норма	Результаты контроля
Набор реагентов «АмплиПрайм® HCV-тест»	форма выпуска 4	в наличии	соответствует
Инструкция по применению набора	в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru	в наличии	соответствует
Краткое руководство по применению набора	в бумажном виде	в наличии	соответствует
Комплект вкладышей	в бумажном виде	в наличии	соответствует
Паспорт качества	в электронном виде на официальном сайте Производителя: www.nextbio.ru	в наличии	соответствует

3. СОСТАВ НАБОРА И ВНЕШНИЙ ВИД КОМПОНЕНТОВ

Компонент	Норма	Результаты контроля
ПЦР-смесь HCV Lyo	96 пробирок (12 стрипов по 8 пробирок). Лиофилизат белого цвета.	соответствует
ПКО-2 HCV Lyo	4 пробирки. Лиофилизат белого цвета.	соответствует
ВКО В Lyo	2 пробирки. Лиофилизат белого цвета.	соответствует
ОКО	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует
Разбавитель	2 пробирки. Прозрачная жидкость.	соответствует

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА¹

Показатель	Норма	Результаты контроля
Предел обнаружения		
Выявление РНК HCV при исследовании разведений стандартного образца предприятия «СОП 125-22 РНК HCV» до концентраций 250 МЕ/мл и 50 МЕ/мл	РНК HCV обнаружена.	соответствует

Результаты тестирования исследуемых образцов и контролей исследования соответствуют критериям валидности, указанным в инструкции по применению набора.

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Условия транспортирования	Условия хранения
Набор транспортировать при температуре от 2 до 8 °С. Допускается транспортирование при температуре от 8 до 25 °С не более 3 суток. Не допускается замораживание реагентов набора.	Набор хранить при температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Восстановленные контрольные образцы (ПКО-2 HCV Lyo, ВКО В Lyo) хранить при температуре от 2 до 8 °С не более 3 месяцев. ПЦР-смесь HCV Lyo хранить в пакете с силикагелем. Упаковку с лиофилизированными реагентами необходимо вскрывать непосредственно перед их восстановлением. Не допускается замораживание реагентов набора.

Дата выдачи паспорта XX.XX.XX

Должность

печать подразделения

подпись (расшифровка)

¹ Тестируются при экстракции из 200 мкл образца.

Пронумеровано, скреплено и прошито
5 лист (а/ов)



Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«НекстБио»
О.О. Лавинюков