

«СКИНВЕЛ»

«УТВЕРЖДАЮ»

подпись/печать

Ко Бум Сук

подпись/печать

«16» января 2024 г.

производства

LUTRONIC Corporation / ЛУТРОНИК Корпорейшн
Корея



Фото 1.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra: Блок основной аппарата лазерного Hollywood Spectra и Стойка шарнирная с кабелем.

LUTRONIC**CE** 2460**UDI**

The UDI would be affixed
under the UDI system
requirements of the
sales country

SN

VE122L003 2023.04.05

Product Name : Frequency Doubled Q-switched Nd-YAG Laser**Model Name : HOLLYWOOD SPECTRA, Weight : 74.7kg****Laser Product Class : CLASS 4****Laser Wavelength : 1064/532/585/650nm****Electrical Shock Class : CLASS I, TYPE B****Electrical Rating : AC220-230V: 50/60Hz, 1.7kVA****AC100-120V: 50/60Hz, 1.7kVA****MD****Manufacturer : Lutronic Corporation****Lutronic Center, 219, Sowon-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do,
KOREA****TEL : +82-31-908-3440****MADE IN KOREA****FAX : +82-31-907-3440****Website: <http://www.lutronic.com>****EC Representative: Emergo Europe****Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands****All Present during a procedure must wear safety goggles.****Never look directly into the laser aperture or at the end of the handpiece
when power is applied. It could result in serious eye injury and/or
blindness.****Operator must check the patient's condition before treatment****considering the contraindication and side effect in operator's manual.****Before operating the device, read the operator's manual.**

**DANGER - VISIBLE AND INVISIBLE LASER
RADIATION AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO
DIRECT OR SCATTERED RADIATION CLASS 4
LASER PRODUCT (IEC60825 - 1:2014)**

Max. Nd-YAG Laser Energy : 1.5J**Q-switched Mode Pulse Duration : 5 ~ 20ns****Nd:YAG Wavelength : 1064 / 532 / 585 / 650nm****Max. Aiming Laser Power@ 655nm : <5mW**

Фото 2.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra: Блок основной аппарата лазерного Hollywood Spectra (маркировка).



Фото 3.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra: Блок основной аппарата лазерного Hollywood Spectra (транспортная упаковка).



Фото 4.
Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Ключ включения.



Фото 5.
Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Стойка шарнирная с кабелем.



Фото 6.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Манипула Zoom Collimated 8 мм.



Фото 7.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Манипула Multi-Depth Focus.



Фото 8.
Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Манипула Zoom.



Фото 9.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:

Манипула SD585 5 мм.



Фото 10.
Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Манипула SD650 2 мм.



Фото 11.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Лоток для манипул.

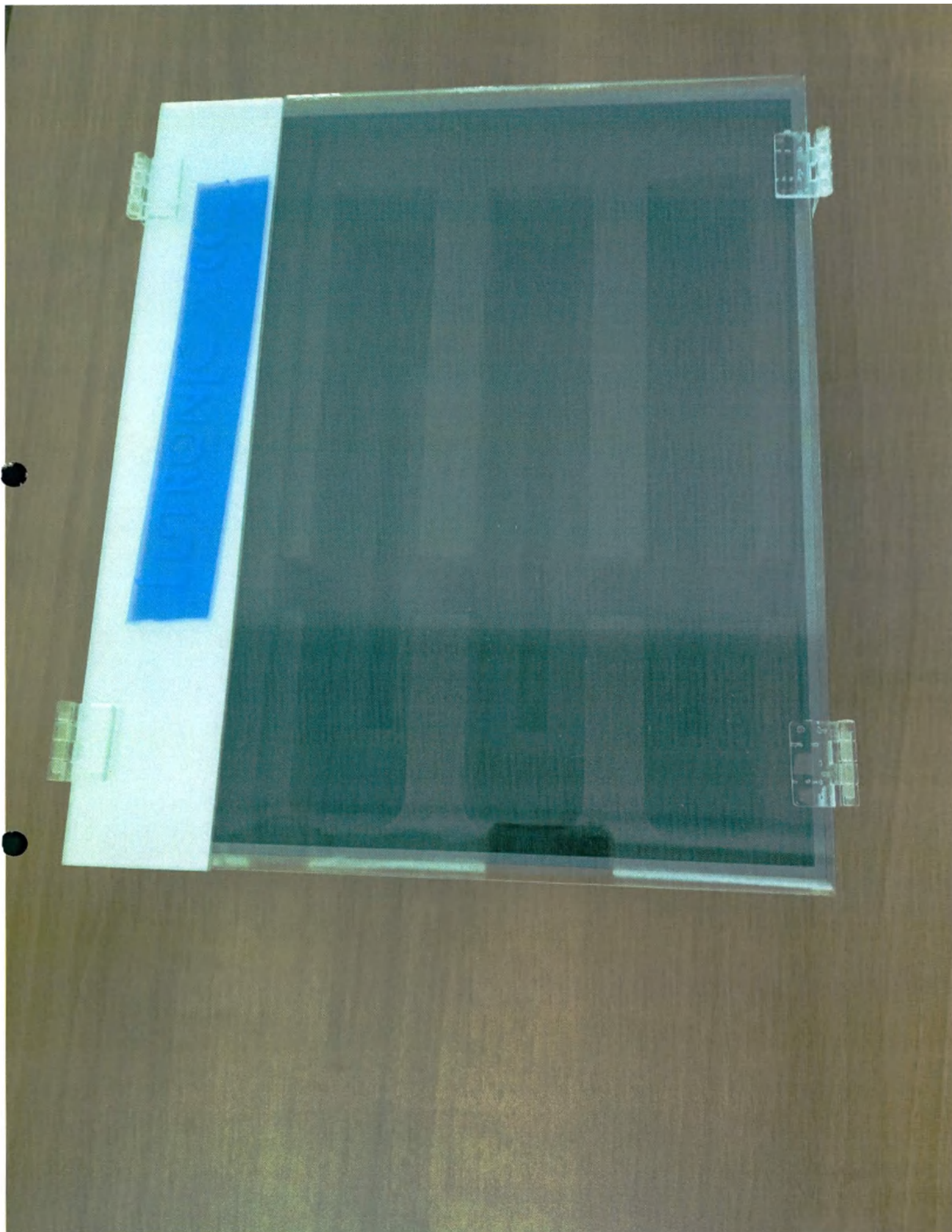


Фото 12.
Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Чехол для манипул.



Фото 13.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Винт для стойки шарнирной с кабелем.



Фото 14.
Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Воронка.

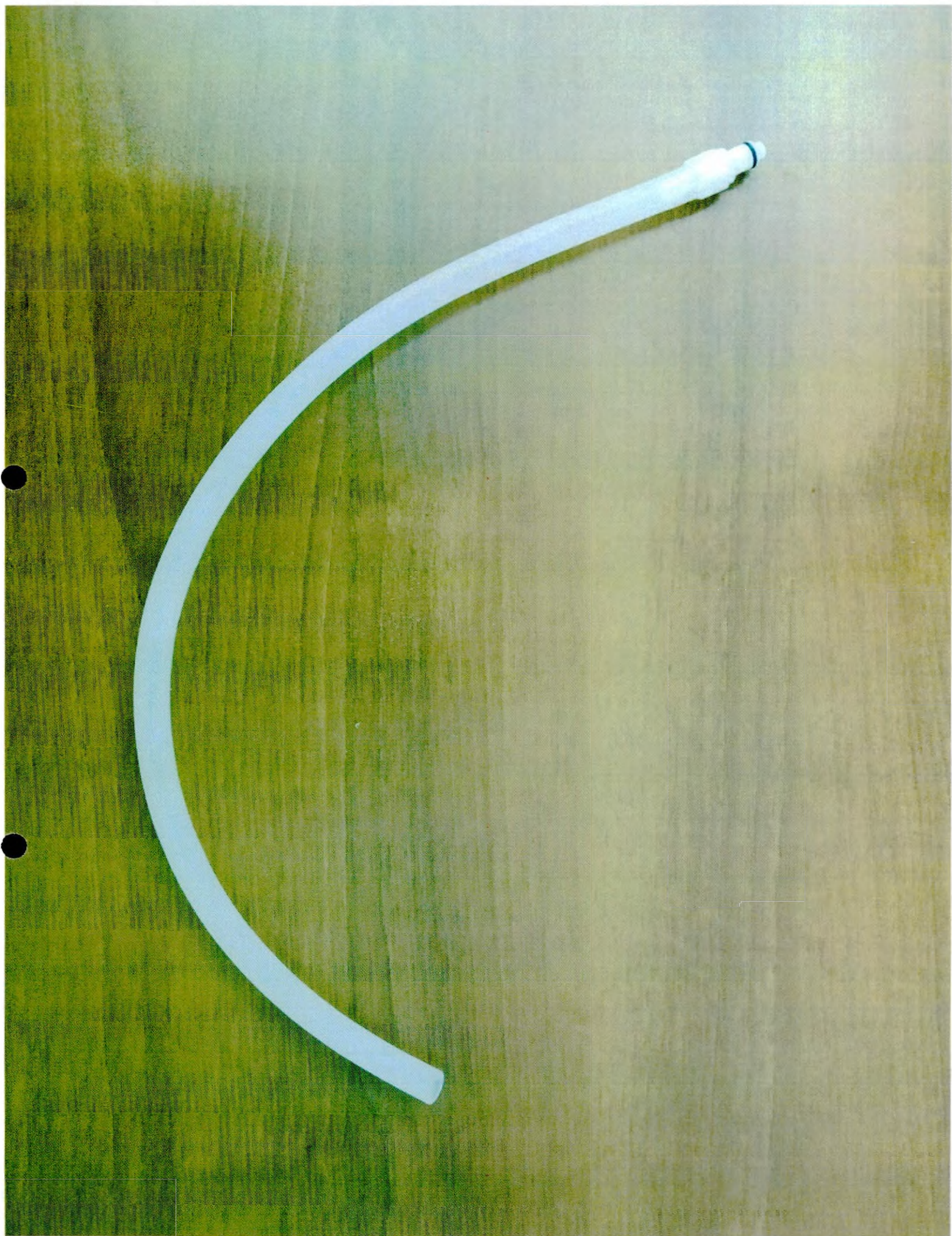


Фото 15.
Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Трубка с муфтой для воронки.



Фото 16.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Переключатель ножной Lutronic.



Фото 17.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:



Фото 18.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Знак предупредительный о лазерном излучении (для процедурного кабинета).



Фото 19.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra: Очки для защиты оператора 532нм/1064нм P1L02, производства LASERVISION GmbH & Co. KG, Германия, в чехле



Фото 20.



Фото 21.



Фото 22.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:

Брелок для ключей включения.

HOLLYWOOD SPECTRA

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG)

Руководство по эксплуатации



CE 2460

ОСТОРОЖНО: перед использованием оборудования просим внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

Фото 23.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:

Руководство по эксплуатации.

HOLLYWOOD SPECTRA

* The laser operator and all staff in the laser treatment room should wear protective eyewear.

Laser Peel

3-8 mm
Zoom-Collimated

Hollywood Peel

Indication	Wavelength (nm)	Tx. Step	Carbon Lotion	Mode	Spot Size (mm)	Fluence (J/cm ²)	Pulse Rate (Hz)	Pass	Session	Interval (week)
• Skin Rejuvenation • Enlarged Pores • Inflammatory Acne & Redness	1064	1	○	Spectra	8	0.9~	5-10	1	3~	2-3
		2	○	QS	8	0.9~	5-10	2-4		
		3	X	Spectra	8	2.4~	5-10	Partial multi-pass		

◇ Endpoint: Mild erythema, slight heat sensation
 - Note: Avoid treating melasma patients or skip the melasma area as the thermal effect could aggravate the condition.

Hollywood Laser Peel® is a 3-step laser peel that uses our carbon-based Spectra Lotion™ with two different operation modes in 1064 nm: Spectra Mode (300 μs) and the Q-switched Mode (5 ns). The Spectra Mode stimulates the skin through gentle heating, and the Q-switched mode delivers mild epidermal exfoliation and resurfacing.

PREPARATION: Spectra Lotion

Lightly apply carbon-based Spectra lotion and leave for 15-20 minutes to allow seeping well into the pores.



① Spectra Mode (300 μs)

Gently heat up the carbon applied skin and induce mild epidermal turnover.



② QS Mode (5 ns)

Explode carbon particles to exfoliate stratum corneum and induce pore contraction.



HyperSurge beam speeds wound healing!

③ Spectra Mode (300 μs)

Repeatedly irradiate the target lesions to induce sebaceous gland contraction and increase skin elasticity.



Soft Peel

Indication	Wavelength (nm)	Carbon Lotion	Mode	Spot Size (mm)	Fluence (J/cm ²)	Pulse Rate (Hz)	Pass	Session	Interval (week)
• Epidermal Melasma • Uneven Skin Tone & Texture	1064	○	QS	8	0.9~	5-10	1	3~	2-3

◇ Endpoint: Mild erythema

Soft Peel™ is a 1-step laser peel that uses our carbon-based Spectra Lotion™ and Q-switched mode (5 ns) in 1064 nm. It effectively targets epidermal melanin that is abnormally dispersed, such as in epidermal melasma. This treatment may be combined with laser toning to treat dermal melasma condition.

PREPARATION: Spectra Lotion

Lightly apply carbon-based Spectra lotion and leave for 15-20 minutes to allow seeping well into the pores.



① QS Mode (5 ns)

Explode carbon particles to target excess pigment without damaging the skin cell.



HyperSurge beam speeds wound healing!

Фото 24.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Руководство врача ламинированное краткое.

Physician's Clinical Guide

LUTRONIC
Intelligent Care

 **HOLLYWOOD**
SPECTRA



Фото 25.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:

Рекомендации для врачей.

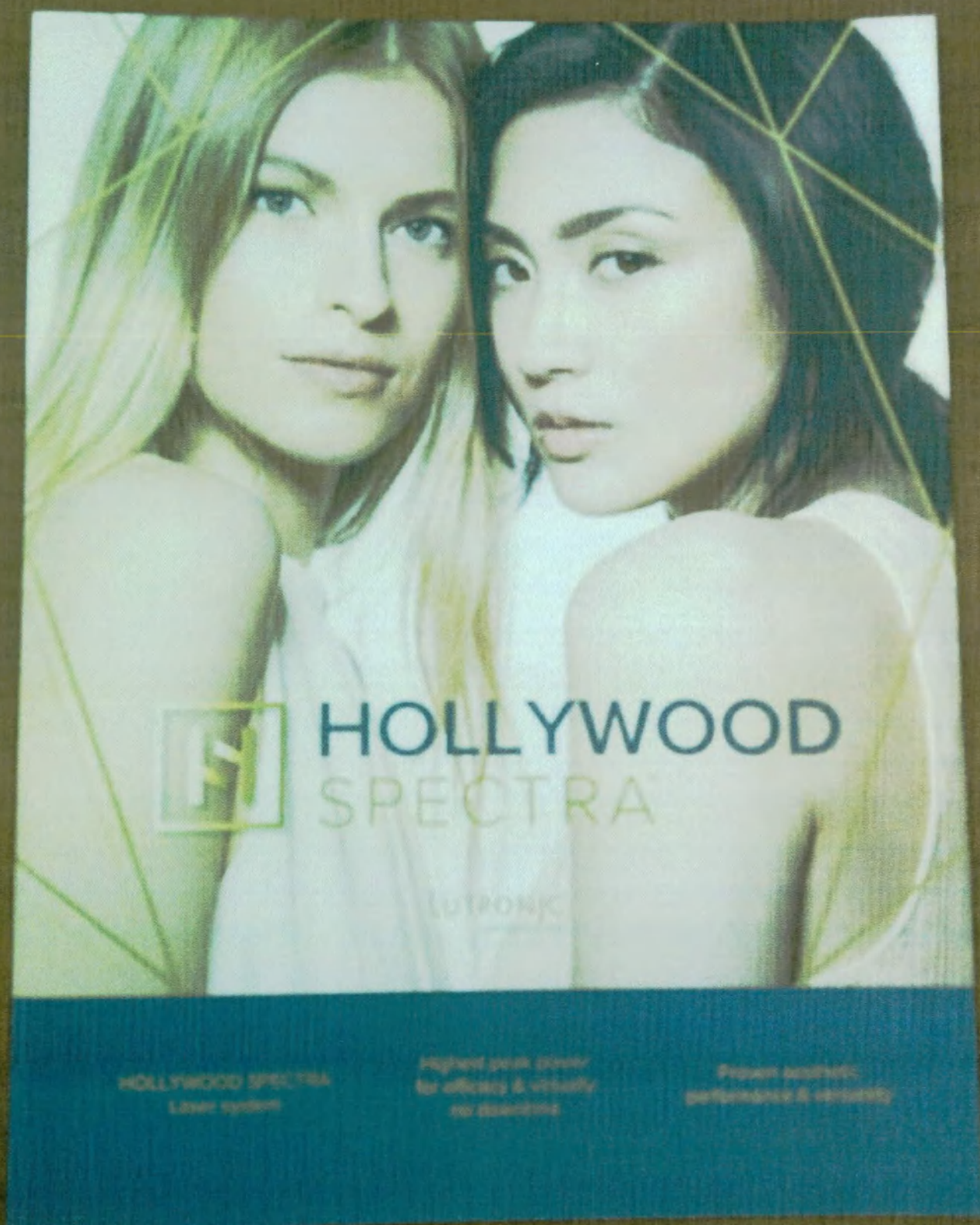


Фото 26.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Брошюра об изделии.

LUTRONIC

HOLLYWOOD LASER PEEL

FACE IT. YOU'RE A STAR.

IMPROVED SKIN TONE • GLOWING, YOUTHFUL LOOKING SKIN
SMOOTHER, SOFTER FEEL • REDUCTION OF FINE LINES AND ACNE SCARS
NO DOWNTIME • SAFE FOR ALL SKIN TONES • STIMULATES COLLAGEN

Ask today about the Hollywood Laser Peel that is known to be used by stars before walking the red carpet!

Hollywood Laser Peel is also known as Spectra Laser Peel

© 2017, LUTRONIC, a division of Cosmova, All rights reserved. Hollywood Laser Peel and all logos are trademarks of the LUTRONIC, a division of Cosmova. LUTRONIC, a division of Cosmova.

Фото 27.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Постер рекламный Hollywood POP.

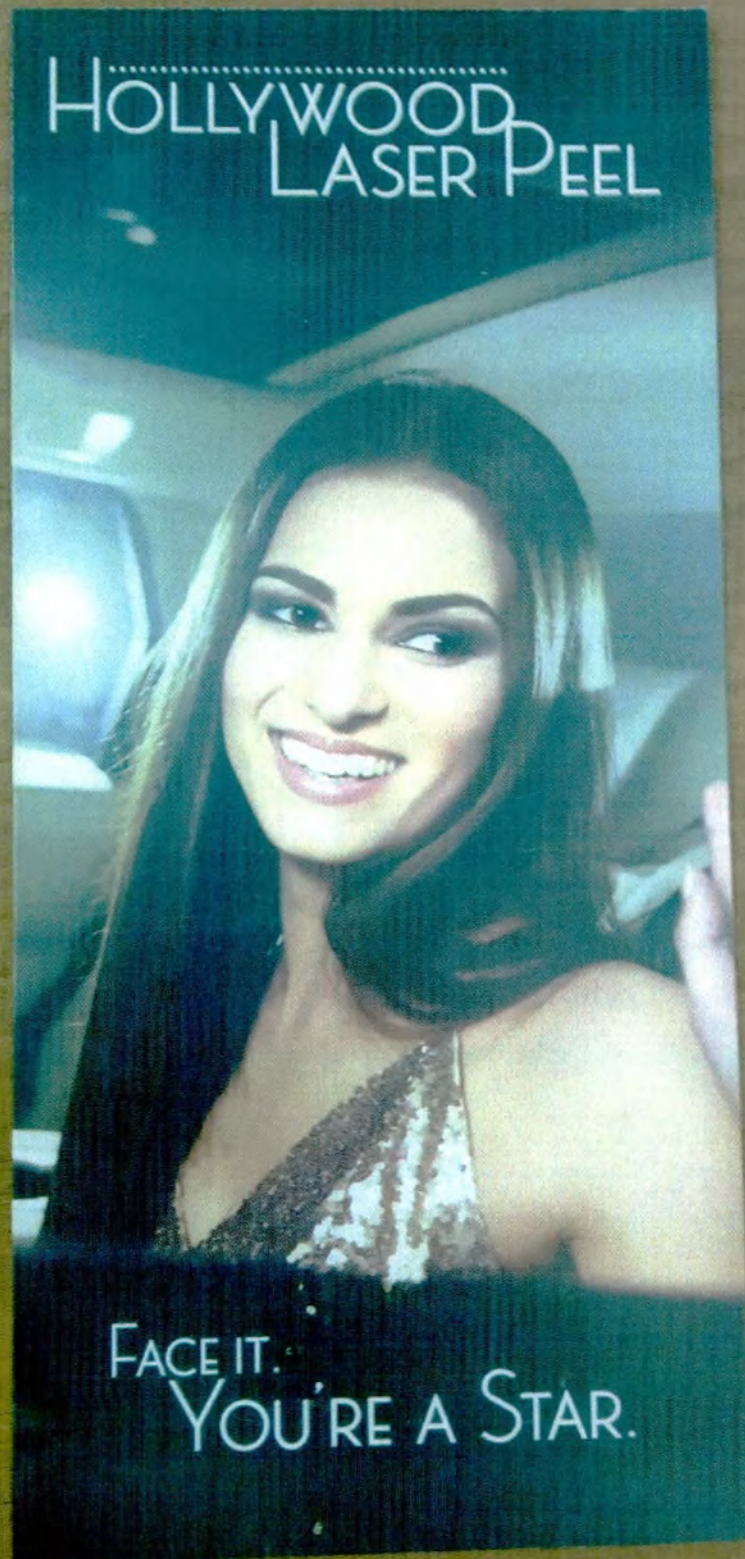


Фото 28.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:

ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU щора Hollywood Laser Peel для пациентов.

Unwanted skin pigmentation?
BE CAMERA READY




HOLLYWOOD
SPECTRA

Фото 29.

Аппарат лазерный неодимовый (Nd: YAG) Hollywood Spectra:
Брошюра для пациента.

INTELLIGENT DESIGN FOR
INTELLIGENT CARE

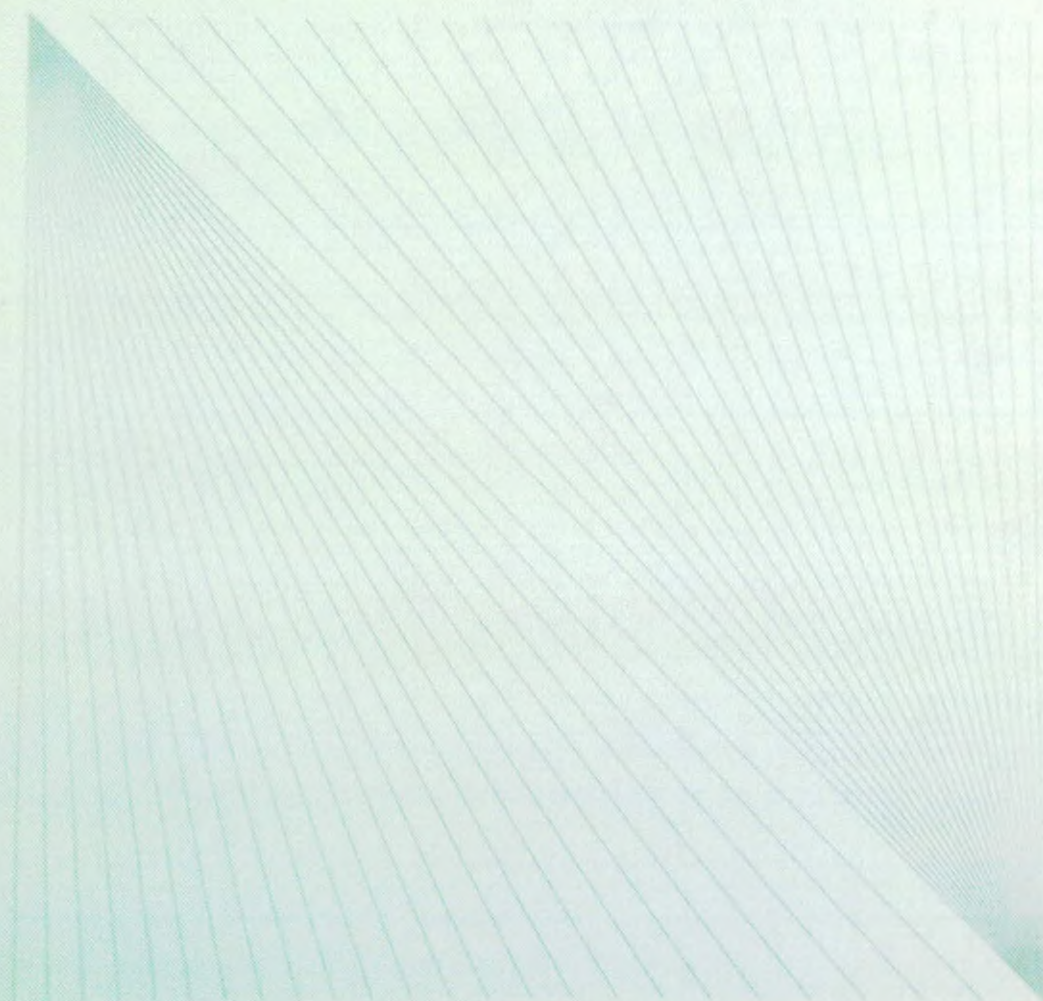

LUTRONIC
Intelligent Care

Фото 30.

ООО «СКИНВЕЛ»

Итого в настоящем документе

(3) листов

Генеральный директор:

Ко Бум Сук _____

МП

