

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Инмедикс»

Костева М.В.

«10» 11 2024 г.



Руководство по эксплуатации
Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур
по ТУ 32.50.30-008-34960786-2023
версия 1.1

г. Москва 2024

Настоящее руководство по эксплуатации на Кушетку медицинскую для осмотра и проведения процедур по ТУ 32.50.30-008-34960786-2023, предназначено для ознакомления с ними и их работой, и содержит сведения по установке, регламенту работы и паспортные данные на изделия.

1. Наименование медицинского изделия.

Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур по ТУ 32.50.30-008-34960786-2023

Варианты исполнения:

1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01 с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:

1.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01 с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;

1.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);

1.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);

1.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);

1.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

2. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01 с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:

2.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01 с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;

2.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);

2.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);

2.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);

2.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01(Y) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, стационарная, в составе:

3.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01(Y) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, стационарная -1 шт.;

3.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);

3.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);

3.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);

3.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01(Y) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, передвижная, в составе:

4.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01(Y) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, передвижная -1 шт.;

4.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);

4.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);

4.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);

4.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

5. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02 с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:

5.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02 с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;

5.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);

5.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);

5.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);

5.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

6. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02 с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:

- 6.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02 с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;
- 6.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 6.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 6.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 6.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
7. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02(У) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, стационарная, в составе:
- 7.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02(У) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, стационарная -1 шт.;
- 7.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 7.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 7.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 7.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
8. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02(У) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, передвижная, в составе:
- 8.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02(У) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, передвижная -1 шт.;
- 8.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 8.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 8.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 8.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
9. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K03, стационарная, в составе:
- 9.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K03, стационарная – 1 шт.;
- 9.2. Подлокотники тип 1 – 2 шт. (при необходимости);
- 9.3. Подлокотники тип 2 – 2 шт. (при необходимости);
- 9.4. Подножка – 1 шт. (при необходимости);
- 9.5. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 9.6. Ручка для перевозки кушетки– 1 шт. (при необходимости);
- 9.7. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 9.8. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 9.9. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
10. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K03, передвижная, в составе:
- 10.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K03, передвижная – 1 шт.;
- 10.2. Подлокотники тип 1 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.3. Подлокотники тип 2 – 2 шт. (при необходимости);
- 10.4. Подножка – 1 шт. (при необходимости);
- 10.5. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 10.6. Ручка для перевозки кушетки– 1 шт. (при необходимости);
- 10.7. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 10.8. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 10.9. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
11. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K04 широкая с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
- 11.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K04 широкая с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;
- 11.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 11.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 11.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 11.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
12. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K04 широкая с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:

- 12.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K04 широкая с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;
- 12.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 12.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 12.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 12.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
13. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K05 широкая с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
- 13.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K05 широкая с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;
- 13.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 13.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 13.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 13.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
14. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K05 широкая с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:
- 14.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K05 широкая с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;
- 14.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 14.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 14.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 14.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
15. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K06 детская с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
- 15.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K06 детская с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;
- 15.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 15.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 15.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 15.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
16. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K06 детская с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:
- 16.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K06 детская с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;
- 16.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 16.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 16.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 16.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
17. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K07 детская с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
- 17.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K07 детская с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;
- 17.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 17.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 17.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 17.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
18. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K07 детская с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:
- 18.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K07 детская с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;
- 18.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 18.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);

- 18.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 18.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
19. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K08 высокая с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
- 19.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K08 высокая с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;
- 19.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 19.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 19.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 19.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
20. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K08 высокая с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:
- 20.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K08 высокая с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;
- 20.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 20.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 20.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 20.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
21. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K09 высокая с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
- 21.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K09 высокая с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;
- 21.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 21.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 21.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 21.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
22. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K09 высокая с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:
- 22.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K09 высокая с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;
- 22.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 22.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 22.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 22.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
23. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K10 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
- 23.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K10 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;
- 23.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 23.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 23.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 23.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
24. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K10 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:
- 24.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K10 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;
- 24.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 24.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 24.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 24.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
25. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K11 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:

25.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K11 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;

25.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);

25.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);

25.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);

25.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

26. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K11 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:

26.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K11 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;

26.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);

26.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);

26.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);

26.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

2. Сведения о производителе медицинского изделия.

Общество с ограниченной ответственностью «Инмедикс», 192236, город Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 38, корпус 2, лит. А, квартира 61

Место производства: ООО «Инмедикс»

РФ, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, деревня Новосаратовка, ул. Покровская дорога, дом 34, корпус 2

Телефон: 812-408-49-31;

8- 495-648-49-31

3. Область применения медицинского изделия.

диагностика, терапия

4. Назначение и показания медицинского изделия.

«Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур по ТУ 32.50.30-008-34960786-2023» (далее по тексту – кушетка или изделие) предназначена для размещения пациента в сидячем или лежащем положениях в смотровых и процедурных кабинетах медицинских организаций для использования в различных видах комPLEMENTАРНОЙ терапии, осмотра, проведения медицинских исследований и процедур.

Показания: Размещение пациента в сидячем или лежащем положениях при наличии симптомов заболевания или болевых ощущений, при необходимости проведения массажных, мануальных, кинезотерапевтических и лечебно-гимнастических процедур.

5. Противопоказания при применении медицинского изделия.

Противопоказания к применению отсутствуют.

6. Потенциальными потребителями медицинского изделия являются.

Мужчины или женщины, от 18 до 95 лет.

для вариантов исполнения изделия Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K06 детская с механизмом подъема подголовника и кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K07 детская с механизмом подъема подголовника: дети от 3 до 18 лет.

7. Принцип действия медицинского изделия.

Конструкция изделия способствует комфортному размещению пациента сидя или лежа для использования в различных видах комPLEMENTАРНОЙ терапии, осмотра, проведения медицинских исследований и процедур.

8. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

Руководство по эксплуатации должно быть в любое время доступно для пользователя (потребителя), чтобы избежать неисправностей вследствие несоблюдения правил эксплуатации и обеспечить бесперебойную работу изделия.

Медицинскими изделиями в лечебных учреждениях пользуется не только персонал, но и пациенты с различным состоянием здоровья, в том числе больные, страдающие инфекционными заболеваниями. Во избежание возникновения рисков передачи инфекции необходимо строгое соблюдение санитарных норм, поддержание порядка и чистоты в лечебных, лечебно – профилактических, социальных учреждениях, поэтому кресло-кушетки должны выдерживать частую влажную очистку и обработку дезинфицирующими средствами, не должны подвергаться гниению, коррозии, размножению паразитов.

Медицинским изделием может пользоваться только медицинский персонал со средним специальным или высшим образованием, после ознакомления с эксплуатационной документацией на изделие.

Недопустимо проведение сервисного и технического обслуживания во время использования изделия.

Если в изделии обнаружены неисправности или повреждения, не используйте его и немедленно сообщите об этом производителю/поставщику.

Если Вы обнаружили повреждения в процессе осмотра или эксплуатации, прекратите использование изделия и обратитесь к производителю/поставщику для заказа ремонта.

Во избежание возникновения рисков из-за присутствия медицинского изделия при определенных исследованиях или лечении использование изделия возможно строго по назначению.

"ВНИМАНИЕ! Модификация изделия не допускается!".

"ВНИМАНИЕ! Модификация этого изделия без разрешения изготовителя не допускается!".

"ВНИМАНИЕ! При модификации изделия необходимо проведение соответствующих контроля и испытаний, гарантирующих длительную безопасную эксплуатацию изделия".

9. Возможные побочные действия при использовании изделий.

Побочных действий при применении изделия не выявлено.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании кресло-кушетки важно соблюдать инструкции и меры предосторожности при использовании изделия.

10. Технические характеристики.

Кушетка состоит из следующих основных элементов см. рисунок 1.1 для стационарных вариантов исполнения K01, K02, K06 и K07, рисунок 1.2 для передвижных вариантов исполнения K01, K02, K06 и K07, рисунок 2 для стационарного варианта исполнения K03 и для передвижного варианта исполнения K03, рисунок 3.1 для стационарных вариантов исполнения K04, K05, K08, K09, K01(У), K02(У), рисунок 3.2 для передвижных вариантов исполнения K04, K05, K08, K09, K01(У), K02(У), рисунок 4.1 для стационарных вариантов исполнения K10, K11, рисунок 4.2 для передвижных вариантов исполнения K10, K11.

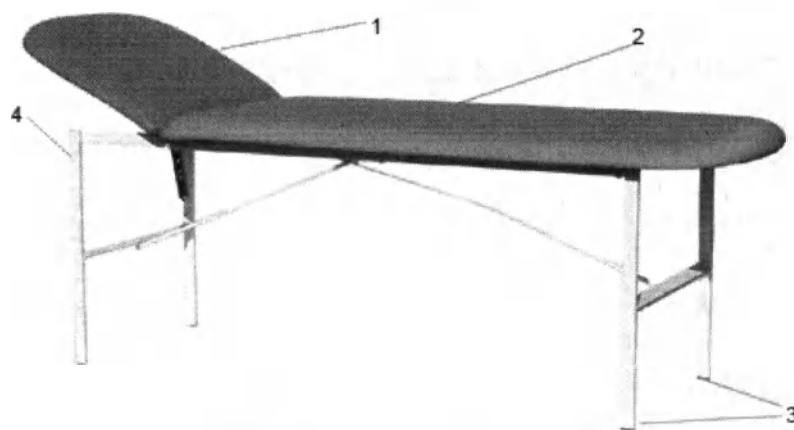


Рисунок 1.1

- 1 – Подголовник
- 2 – Ложе
- 3 – Заглушки
- 4 – Рама

Штатив (не представлен на рисунке, см. приложение 1 рисунок 1), Держатель для одноразового полотенца-простыни (не представлен на рисунке, см. приложение 1 рисунок 3), Откидная подушка (не представлена на рисунке, см. приложение 1 рисунок 4).

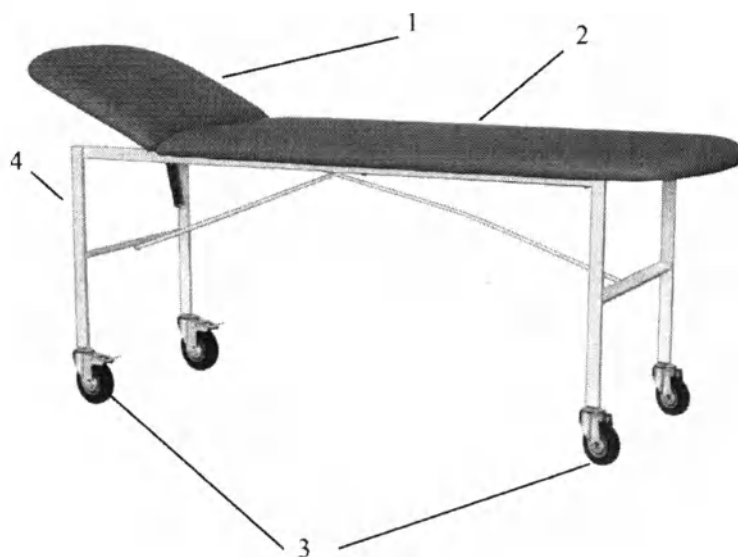


Рисунок 1.2

- 1 – Подголовник
- 2 – Ложе
- 3 – Колесная опора
- 4 – Рама

Штатив (не представлен на рисунке, см. приложение 1 рисунок 1), Держатель для одноразового полотенца-простыни (не представлен на рисунке, см. приложение 1 рисунок 3), Откидная подушка (не представлена на рисунке, см. приложение 1 рисунок 4).



Рисунок 2

- 1 – Откидная подушка
- 2 – Ложе – состоит из сиденья, спинной секции и ножной секции при раскладывании в горизонтальную плоскость
- 3 - Спинная секция
- 4 - Ножная секция

6 – Заглушки (для стационарного варианта исполнения)

6 – Рама

7 – Подножка

9 – Подлокотники (тип 1 и тип 2 см. приложение 1 рисунки 5 и 6)

10 – Колесная опора (для передвижного варианта исполнения)

Штатив (не представлен на рисунке, см. приложение 1 рисунок 1), Держатель для одноразового полотенца-простыни (не представлен на рисунке, см. приложение 1 рисунок 3), Ручка для перевозки кушетки (не представлена на рисунке, см. приложение 1 рисунок 2)

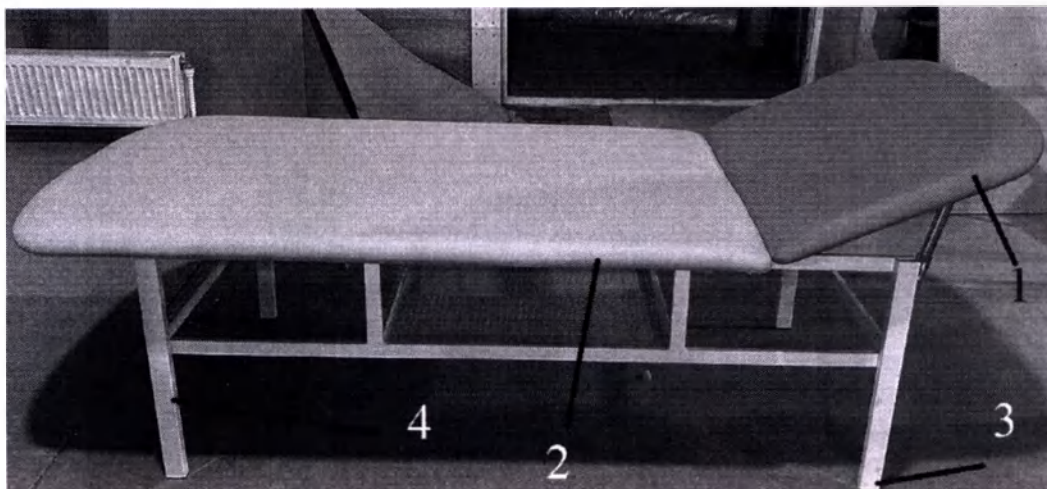


Рисунок 3.1

1 – Подголовник

2 – Ложе

3 – Заглушки

4 – Рама

Штатив (не представлен на рисунке, см. приложение 1 рисунок 1), Держатель для одноразового полотенца-простыни (не представлен на рисунке, см. приложение 1 рисунок 3), Откидная подушка (не представлена на рисунке, см. приложение 1 рисунок 4)

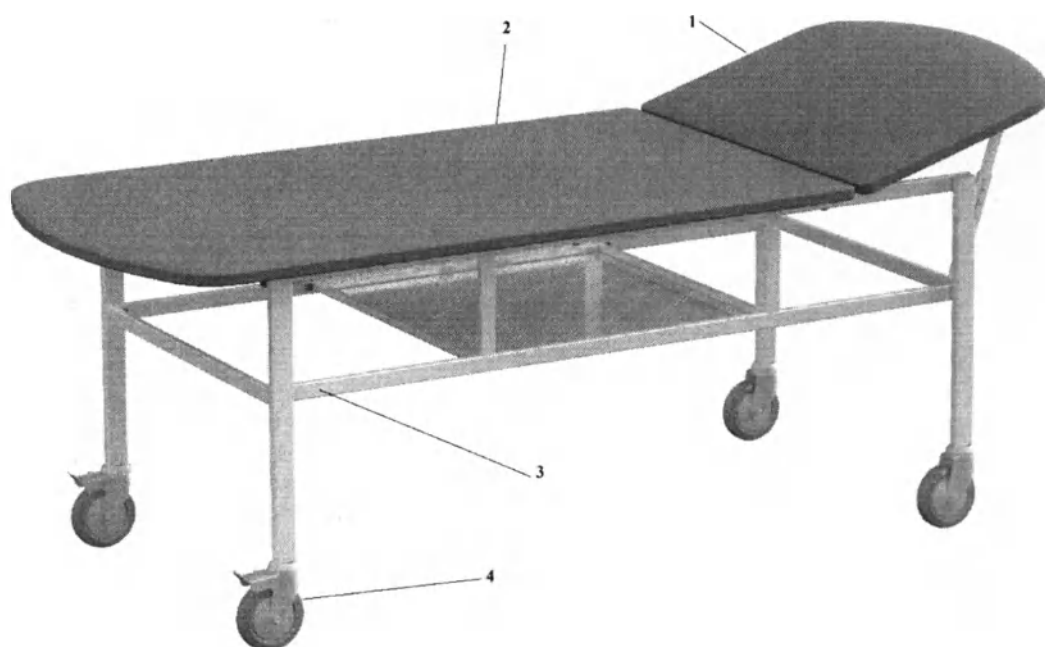


Рисунок 3.2

- 1- Подголовник
- 2- Ложе
- 3-Рама
- 4- Колесная опора

Штатив (не представлен на рисунке, см. приложение 1 рисунок 1), Держатель для одноразового полотенца-простыни (не представлен на рисунке, см. приложение 1 рисунок 3), Откидная подушка (не представлена на рисунке, см. приложение 1 рисунок 4)

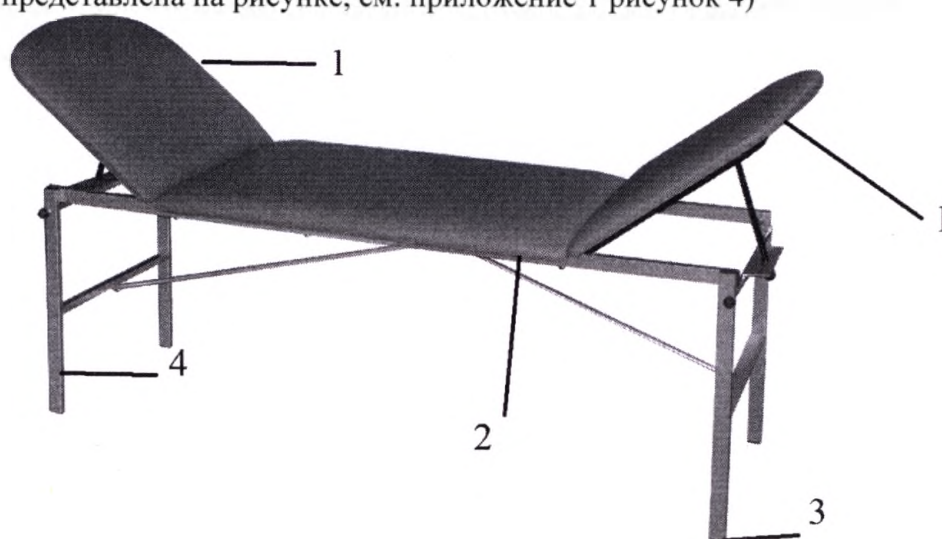


Рисунок 4.1

- 1 - Подголовник
- 2 - Ложе
- 3 - Заглушки
- 4 - Рама

Штатив (не представлен на рисунке, см. приложение 1 рисунок 1), Держатель для одноразового

полотенца-простыни (не представлен на рисунке, см. приложение 1 рисунок 3), Откидная подушка (не представлена на рисунке, см. приложение 1 рисунок 4)

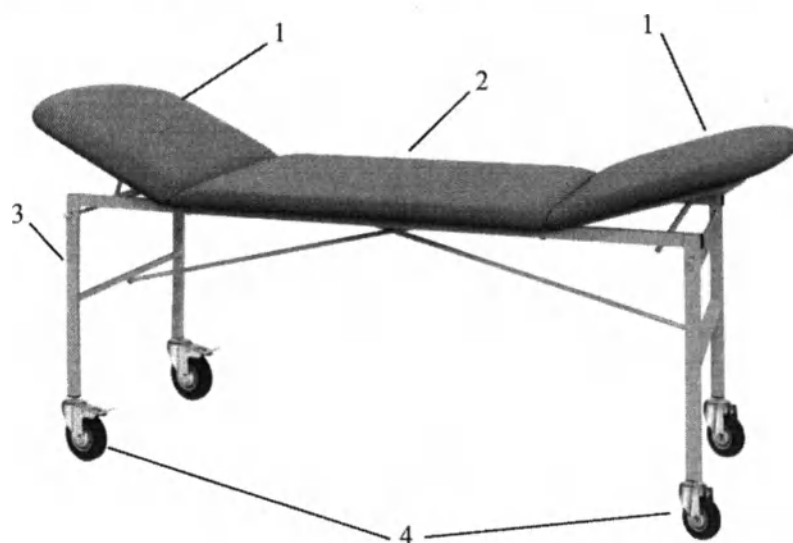


Рисунок 4.2

- 1 – Подголовник
- 2 – Ложе
- 3 - Рама
- 4- Колесная опора

Штатив (не представлен на рисунке, см. приложение 1 рисунок 1), Держатель для одноразового полотенца-простыни (не представлен на рисунке, см. приложение 1 рисунок 3), Откидная подушка (не представлена на рисунке, см. приложение 1 рисунок 4)

Основные параметры и характеристики

Кушетка должна соответствовать основным параметрам и размерам, указанным в таблицах 1, 2. Масса изделия соответствует значениям, указанным в таблице 1 и составляющих изделия значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 1*

Наименование параметра /вариант исполнения изделия	K01 стационарная	K01 (У) стационарная	K02 стационарная	K02 (У) стационарная	K03 стационарная	K04 стационарная	K05 стационарная	K06 стационарная	K07 стационарная	K08 стационарная	K09 стационарная	K10 стационарная	K11 стационарная
Масса, кг (от минимальной до максимальной комплектации **)	от 25 до 26	от 30 до 31	от 25 до 26	от 30 до 31	от 38 до 43	от 37 до 38	от 37 до 38	от 20 до 21	от 20 до 21	от 34 до 35	от 34 до 35	от 25 до 26	от 25 до 26

Наименование параметра /вариант исполнения изделия	K01 стационарная	K01 (У) стационарная	K02 стационарная	K02 (У) стационарная	K03 стационарная	K04 стационарная	K05 стационарная	K06 стационарная	K07 стационарная	K08 стационарная	K09 стационарная	K10 стационарная	K11 стационарная
Габаритные размеры, в положении сидя в минимальной комплектации ***. ДхШхВ мм.	-	-	-	-	900 х 663х 1350 (ширина: 990 с подлокотниками тип 1, 870 с подлокотниками тип 2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование параметра / вариант исполнения изделия	K01 стационарная	K01 (У) стационарная	K02 стационарная	K02 (У) стационарная	K03 стационарная	K04 стационарная	K05 стационарная	K06 стационарная	K07 стационарная	K08 стационарная	K09 стационарная	K10 стационарная	K11 стационарная
Габаритные размеры минимальной комплектации ** изделия (дхшхв), мм	1930 x 610 x 560	1930 x 610 x 560	1930 x 610 x 560	1930 x 610 x 560	1850x663x590 (ширина: 990 с подлокотниками тип 1, 870 с подлокотниками тип 2)	2000x800x560	2000x800x560	1500x610x560	1500x610x561	2000x700x750	2000x700x750	1930x610x560	1930x610x560
Размер подголовника (дхш), мм	515x610	515x610	515x610	515x610	-	555x800	555x800	450x610	450x610	555x700	555x700	515x610	515x610
Размер рамы, мм Допуск ±20 мм	1580x490xh520	1580x490xh520	1580x490xh520	1580x490xh520	695x550x530	1580x700xh520	1580x700xh520	1150x490xh520	1150x490xh520	1580x600x710	1580x600x710	1580x490x520	1580x490x520

Наименование параметра / вариант исполнения изделия	K01 стационарная	K01 (У) стационарная	K02 стационарная	K02 (У) стационарная	K03 стационарная	K04 стационарная	K05 стационарная	K06 стационарная	K07 стационарная	K08 стационарная	K09 стационарная	K10 стационарная	K11 стационарная
Размер ножной секции, ВхШ (Ш вверху)хТ,мм	-	-	-	-	440 x 500 (600) x 80	-	-	-	-	-	-	-	-
Размер спинной секции, ВхШ(Ш сверху)хТ,мм	-	-	-	-	860 x 600 (400)x 80	-	-	-	-	-	-	-	-
Угол регулировки подголовника, градус	0-25°	0-25°	0-25°	0-25°	-	0-25°	0-25°	0-25°	0-25°	0-25°	0-25°	0-25°	0-25°
Угол регулировки ножной секции, градус	-	-	-	-	0-90°	-	-	-	-	-	-	-	-
Угол спинной секции, градус	-	-	-	-	0-77°	-	-	-	-	-	-	-	-
Максимальная нагрузка, кг, не более	150	200	150	200	на ложе-160 кг на спинную секцию - 50 кг на ножную секцию - 50 кг	250	250	100	100	200	200	150	150

Наименование параметра /вариант исполнения изделия	K01 стационарная	K01 (У) стационарная	K02 стационарная	K02 (У) стационарная	K03 стационарная	K04 стационарная	K05 стационарная	K06 стационарная	K07 стационарная	K08 стационарная	K09 стационарная	K10 стационарная	K11 стационарная
Момент силы относительно оси вращения секций ложа Н*м	10	10	10	10	на спинную секцию – 35, на ножную секцию - 15	12	12	10	10	12	12	10	10

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра /вариант исполнения изделия	K01 передвижная	K01 (У) передвижная	K02 передвижная	K02 (У) передвижная	K03 передвижная	K04 передвижная	K05 передвижная	K06 передвижная	K07 передвижная	K08 передвижная	K09 передвижная	K10 передвижная	K11 передвижная
Масса, кг (от минимальной до максимальной комплектации **)	от 29 до 30	от 34 до 35	от 29 до 30	от 34 до 35	от 42 до 47	от 41 до 42	от 41 до 42	от 24 до 25	от 24 до 25	от 38 до 39	от 38 до 39	от 29 до 30	от 29 до 30
Габаритные размеры, в положении сидя минимальной комплектации **, ДхШхВ, мм.	-	-	-	-	1120 х 683 х 1430 (ширина: 990 с подлокотниками тип 1, 870 с подлокотниками тип 2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование параметра / вариант исполнения изделия	K01 передв ижная	K01 (У) пере движ ная	K02 пере движ ная	K02 (У) передви жная	K03 перед вижна я	K04 перед вижна я	K05 передви жная	K06 передви жная	K07 передви жная	K08 передви жная	K09 перед вижна я	K10 передви жная	K11 передви жная
Габаритные размеры минимальной комплектации ** изделия (дхшхв), мм	1930 x 610 x 710	1930 x 610 x 710	1930 x 610 x 710	1930 x 610 x 710	1850x683x680 (ширина: 990 с подлокотниками тип 1, 870 с подлокотниками тип 2) - с подножкой: 1910x683x680 (ширина: 990 с подлокотниками тип 1, 870 с подлокотниками тип 2)	2000x800x710	2000x800x710	1500x610x710	1500x610x710	2000x700x900	2000x700x900	1930x610x710	1930x610x710
Размер подголовника (дхш), мм	515x610	515x610	515x610	515x610	-	555x800	555x800	450x610	450x610	555x700	555x700	515x610	515x610
Размер рамы, мм Допуск ±20 мм	1580x490xh520	1580x490xh520	1580x490xh520	1580x490xh520	695x550x530	1580x700xh520	1580x700xh520	1150x490xh520	1150x490xh520	1580x600x710	1580x600x710	1580x490x520	1580x490x520

Наименование параметра /вариант исполнения изделия	K01 передв ижная	K01 (У) пере движ ная	K02 пере движ ная	K02 (У) передв ижная	K03 перед вижна я	K04 перед вижна я	K05 передв ижная	K06 передв ижная	K07 передв ижная	K08 передв ижная	K09 перед вижна я	K10 передв ижная	K11 передв ижная
Размер ножной секции, ВхШ (Ш сверху)хТ,мм	-	-	-	-	440 х 500 (600) х 80	-	-	-	-	-	-	-	-
Размер спинной секции, ВхШ (Ш сверху)хТ,мм	-	-	-	-	860 х 600 (400)х 80	-	-	-	-	-	-	-	-
Угол регулировки подголовника, градус	0-25°	0-25°	0-25°	0-25°	-	0-25°	0-25°	0-25°	0-25°	0-25°	0-25°	0-25°	0-25°
Угол регулировки ножной секции, градус	-	-	-	-	0-90°	-	-	-	-	-	-	-	-
Угол спинной секции, градус	-	-	-	-	0-77°	-	-	-	-	-	-	-	-
Максимальная нагрузка, кг, не более	150	200	150	200	на ложе - 160 кг на спинную секцию - 50 кг на ножную секцию - 50 кг	250	250	100	100	200	200	150	150
Наибольшее усилие, необходимое для перемещения, Н	30	30	30	30	40	30	30	30	30	30	30	40	40

Наименование параметра /вариант исполнения изделия	K01 передв ижная	K01 (У) пере движ ная	K02 пере движ ная	K02 (У) передви жная	K03 перед вижна я	K04 перед вижна я	K05 передви жная	K06 передви жная	K07 передви жная	K08 передви жная	K09 перед вижна я	K10 передви жная	K11 передви жная
Момент силы относительно оси вращения секций ложа, Н*м	10	10	10	10	на спинн ую секци ю – 35, на ножн ую секци ю - 15	12	12	10	10	12	12	10	10

*Отклонение параметров таблицы 1, где не указано составляет не более 15%

** минимальная комплектация изделия – это комплектация изделия по п.1.4 без дополнительных составляющих, указанных при необходимости, максимальная комплектация изделия – это комплектация изделия по п.1.4 со всеми дополнительными составляющими.

Таблица 2*

Наименование составляющей изделия	Описание и характеристики
Подлокотник (для варианта исполнения Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур К03)	Подлокотник – это часть изделия, на которую пациент опирается руками Съёмные, регулируются по высоте и вращаются на 360 градусов. Подлокотники изготовлены из фанеры толщиной 9 мм, обиты поролоном толщиной 50 мм, обтянуты экокожей. Подлокотник тип 1 и тип 2 имеют идентичную конструкцию. подлокотник тип 1 Размер (дхшхв), мм: 450х190х55 Диаметр и длина стержня, мм: диаметр 16 мм, длина 380 мм Высота регулировки, мм: 150 мм Масса 1,4 кг Максимальная нагрузка 40 кг подлокотник тип 2 Размер (дхшхв), мм: 370х130х55 Диаметр и длина стержня, мм: диаметр 16 мм, длина 380 мм Высота регулировки, мм: 150 мм Масса 1,2 кг Максимальная нагрузка 40 кг
Подножка (для вариантов исполнения Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур К03)	Используется для опоры ног. Размер (дхшхв), мм: 480х230х30 Длина и ширина прямоугольных трубок, мм. Сечение 20*20 мм, длина 230 мм Максимальная нагрузка 40 кг Масса 2,9 кг
Колесная опора (для передвижных вариантов исполнения)	Колесная опора – прорезиненные колеса (4 шт.), диаметр колес 125 мм (2 колеса с тормозом), ширина обода 25 мм 

	колесо (с тормозом) Тип: с болтом Размер штыря DхL, мм: 12х30 Тип подшипника: скольжения Диаметр колеса, мм: 125 Высота, мм: 152 Ширина колеса, мм: 27 Диаметр крепежного отверстия, мм: M12 Нагрузка, кг: 100 Масса, кг: 0,96  колесо (без тормоза) Тип: с болтом Размер штыря DхL, мм: 12х30 Тип подшипника: скольжения Диаметр колеса, мм: 125 Высота, мм: 152 Ширина колеса, мм: 27 Диаметр крепежного отверстия, мм: M12 Нагрузка, кг: 100 Масса, кг: 0,81
Заглушки (для стационарных изделий)	Размер (дхшхв), мм: 30х15х20 или 40х20х20
Штатив	Предназначен для фиксации капельниц, инфузионных баллонов на изделия. Размер, мм: высота от 1000 до 2000 мм, 2 держателя (габаритный размер держателей 310 мм) Диаметр трубки стойки 16 мм Количество держателей, шт. 2 Максимальная нагрузка на каждый держатель, кг: 5 Масса, кг: 1,5
Держатель для одноразового полотенца-простыни	Изделие, которое крепится к кушетке и представляет собой металлический каркас на который устанавливается свернутый в рулон одноразовое полотенце-простыня. Размер (дхшхв), мм: 435 мм длина, 180 мм высота, 16 мм Диаметр трубки, мм: 16 Масса, кг: 0,5 кг
Ручка для перевозки кушетки	Используются для перемещения изделия Размер (глубина х высота х диаметр трубки), мм: 365х125х18 Масса, кг: 0,35
Откидная подушка	Подушка поддерживает голову пациента, шею и плечевой пояс, способствует правильному дыханию и достаточному притоку кислорода к тканям головного мозга при проведении процедур осмотра/лечения. Размер (дхшхт), мм: 270х150х50 Масса, кг: 0,2

*Отклонение параметров таблицы 2, где не указано составляет 15%.

Механизмы регулировки: растомат или механический клиновый упор.

Растомат (для вариантов исполнения K01, K01(Y), K04, K06, K08, K10):

Растомат — телескопический механизм для регулировки положения угла наклона подголовника.

Механизм поднимает подголовник и блокирует в верхнем положении. Подголовник можно

ставить и в горизонтальном положении. Телескопическая система позволяет остановить опускание подголовника на любой из ступеней механизма, зафиксировав ее в наиболее комфортном положении, учитывая позу и рост пациента. Механизм 6-ти ступенчатый, угол наклона составляет от 0 до 25 градусов.

Угол регулировки положений 0-25° с шагом: 2, 5, 10, 15, 20, 25 °.

Механический клиновый упор (для вариантов исполнения K02, K02(Y), K03, K05 K07, K09, K11):

Клиновый упор состоит из пластины с отверстием, приваренной к оси вращения. В отверстие пластины вставлена направляющая ось. Изменение угла наклона происходит: поворачиваем ось вращения, чтобы направляющая вышла из зацепления в отверстии пластины, поднимаем или опускаем подголовник до необходимого угла и поворачиваем ось до зацепления направляющей в отверстии пластины. Угол регулировки положений 0-25° бесступенчат.

Условия эксплуатации:

Изделия при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69

для вида исполнения УХЛ 4.2:

при температуре от +10 до +35°

влажности 80% при 25 °С

давлении окружающего воздуха от 84,0 до 106,7 кПа

1. Комплект поставки

«Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур по ТУ 32.50.30-008-34960786-2023»
в собранном виде одного варианта исполнения - 1 шт.

Варианты исполнения:

1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01 с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:

1.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01 с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;

1.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);

1.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);

1.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);

1.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

2. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01 с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:

2.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01 с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;

2.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);

2.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);

2.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);

2.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01(Y) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, стационарная, в составе:

3.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01(Y) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, стационарная -1 шт.;

3.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);

3.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);

3.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);

3.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01(Y) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, передвижная, в составе:

4.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K01(Y) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, передвижная -1 шт.;

- 4.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 4.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 4.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 4.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02 с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
 - 5.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02 с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;
 - 5.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
 - 5.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
 - 5.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
 - 5.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
6. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02 с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:
 - 6.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02 с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;
 - 6.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
 - 6.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
 - 6.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
 - 6.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
7. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02(У) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, стационарная, в составе:
 - 7.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02(У) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, стационарная -1 шт.;
 - 7.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
 - 7.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
 - 7.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
 - 7.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
8. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02(У) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, передвижная, в составе:
 - 8.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K02(У) с механизмом подъема подголовника и усиленным каркасом, передвижная -1 шт.;
 - 8.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
 - 8.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
 - 8.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
 - 8.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
9. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K03, стационарная, в составе:
 - 9.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K03, стационарная – 1 шт.;
 - 9.2. Подлокотники тип 1 – 2 шт. (при необходимости);
 - 9.3. Подлокотники тип 2 – 2 шт. (при необходимости);
 - 9.4. Подножка – 1 шт. (при необходимости);
 - 9.5. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
 - 9.6. Ручка для перевозки кушетки– 1 шт. (при необходимости);
 - 9.7. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
 - 9.8. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
 - 9.9. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
10. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K03, передвижная, в составе:
 - 10.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K03, передвижная – 1 шт.;
 - 10.2. Подлокотники тип 1 – 2 шт. (при необходимости);
 - 10.3. Подлокотники тип 2 – 2 шт. (при необходимости);
 - 10.4. Подножка – 1 шт. (при необходимости);
 - 10.5. Штатив – 1 шт. (при необходимости);

- 10.6. Ручка для перевозки кушетки – 1 шт. (при необходимости);
- 10.7. Держатель для одноразового полотенца-простыни – 1 шт. (при необходимости);
- 10.8. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 10.9. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
11. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K04 широкая с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
- 11.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K04 широкая с механизмом подъема подголовника, стационарная - 1 шт.;
- 11.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 11.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни – 1 шт. (при необходимости);
- 11.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 11.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
12. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K04 широкая с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:
- 12.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K04 широкая с механизмом подъема подголовника, передвижная - 1 шт.;
- 12.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 12.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни – 1 шт. (при необходимости);
- 12.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 12.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
13. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K05 широкая с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
- 13.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K05 широкая с механизмом подъема подголовника, стационарная - 1 шт.;
- 13.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 13.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни – 1 шт. (при необходимости);
- 13.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 13.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
14. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K05 широкая с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:
- 14.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K05 широкая с механизмом подъема подголовника, передвижная - 1 шт.;
- 14.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 14.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни – 1 шт. (при необходимости);
- 14.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 14.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
15. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K06 детская с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
- 15.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K06 детская с механизмом подъема подголовника, стационарная - 1 шт.;
- 15.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 15.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни – 1 шт. (при необходимости);
- 15.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 15.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
16. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K06 детская с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:
- 16.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K06 детская с механизмом подъема подголовника, передвижная - 1 шт.;
- 16.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 16.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни – 1 шт. (при необходимости);
- 16.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 16.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

17. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K07 детская с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
- 17.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K07 детская с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;
 - 17.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
 - 17.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
 - 17.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
 - 17.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
18. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K07 детская с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:
- 18.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K07 детская с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;
 - 18.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
 - 18.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
 - 18.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
 - 18.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
19. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K08 высокая с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
- 19.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K08 высокая с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;
 - 19.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
 - 19.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
 - 19.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
 - 19.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
20. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K08 высокая с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:
- 20.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K08 высокая с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;
 - 20.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
 - 20.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
 - 20.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
 - 20.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
21. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K09 высокая с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
- 21.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K09 высокая с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;
 - 21.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
 - 21.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
 - 21.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
 - 21.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
22. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K09 высокая с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:
- 22.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K09 высокая с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;
 - 22.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
 - 22.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
 - 22.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
 - 22.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
23. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K10 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
- 23.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K10 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;

- 23.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
- 23.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
- 23.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
- 23.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 24. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K10 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:
 - 24.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K10 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;
 - 24.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
 - 24.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
 - 24.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
 - 24.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 25. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K11 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, стационарная, в составе:
 - 25.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K11 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, стационарная -1 шт.;
 - 25.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
 - 25.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
 - 25.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
 - 25.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 26. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K11 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, передвижная, в составе:
 - 26.1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур K11 трёхсекционная двухсторонняя с механизмом подъема подголовника, передвижная -1 шт.;
 - 26.2. Штатив – 1 шт. (при необходимости);
 - 26.3. Держатель для одноразового полотенца-простыни– 1 шт. (при необходимости);
 - 26.4. Откидная подушка – 1 шт. (при необходимости);
 - 26.5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

12. Подготовка к работе и порядок работы

ВНИМАНИЕ! Запрещается располагать под кушеткой посторонние предметы, они могут быть повреждены при регулировке кушетки.

12.1 Установка и ввод в эксплуатацию

Перед вводом в эксплуатацию изделия внимательно осмотрите упаковку, распакуйте изделие и сверьте комплектность. Ввод в эксплуатацию изделия осуществляется сервисным инженером производителя или уполномоченной организацией производителя.

После пребывания изделия в условиях отрицательных температур распаковку производите после выдержки в помещении при температуре +10...+35°C и относительной влажности, не превышающей 80%, в течение 12 часов.

Перед использованием кушетки внимательно прочитайте данное руководство.

Расположение изделия

Кушетка должна быть расположена так, чтобы вокруг нее с каждой стороны оставалось не менее 5 см свободного пространства. Необходимо также следить за тем, чтобы над или под кушеткой не было каких-либо объектов, препятствующих изделию в движении (для передвижных вариантов исполнения). Выбор места для кушетки должен исключать случайные удары и толчки.

12.2 Подготовка к работе с изделием

Кушетка поставляется к пользователю в собранном виде.

При наличии съёмных составляющих (подлокотники, подножка, штатив, ручка для перевозки кушетки, держатель для одноразового полотенца-простыни) после распаковки изделия установите их, при этом крепко фиксируйте, дабы избежать их падений и повреждений, а также травм пациента.

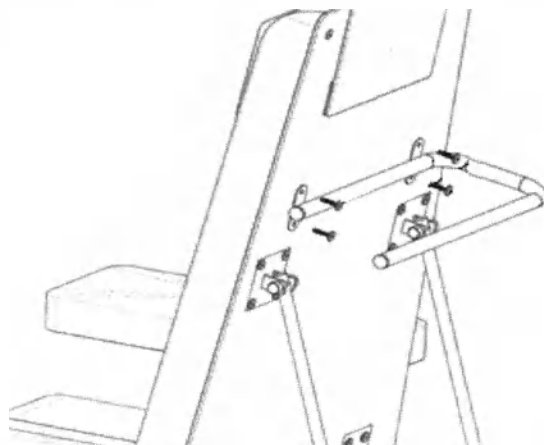


Схема установки держателя для одноразового полотенца-простыни

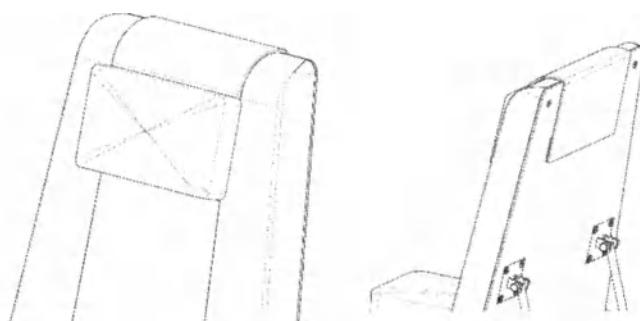


Схема установки откидной подушки

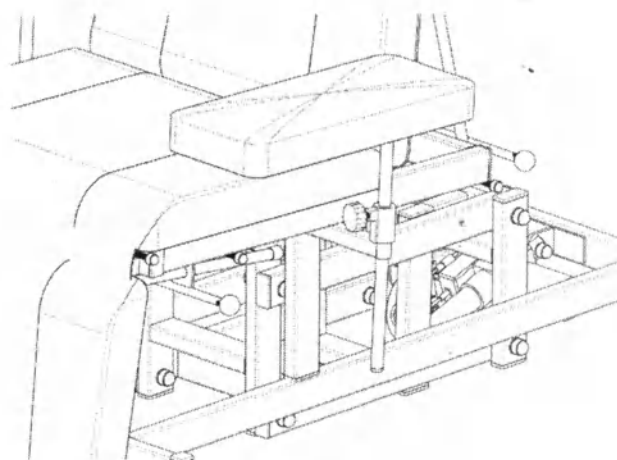
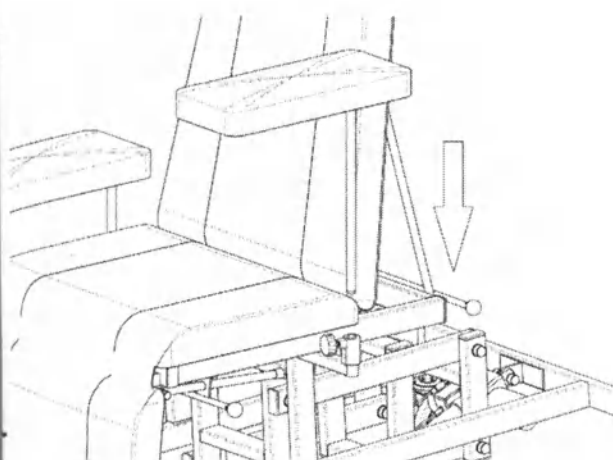


Схема установки подлокотника

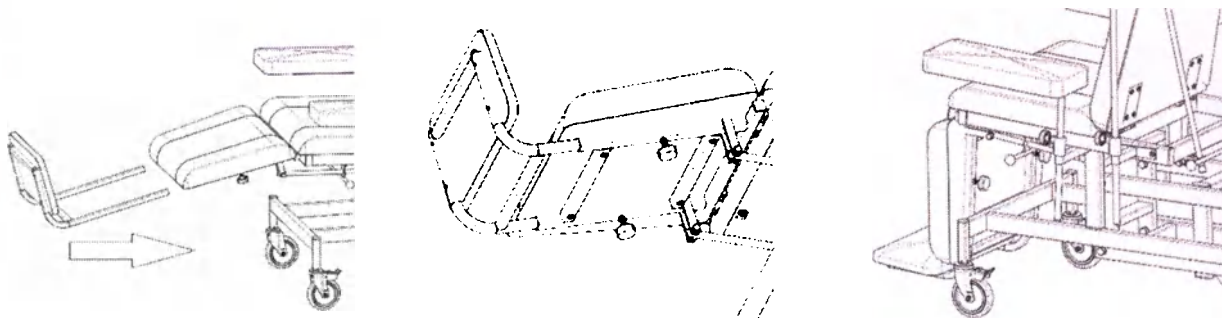


Схема установки подножки

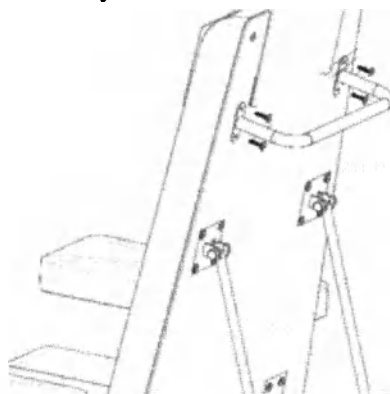


Схема установки ручки для перевозки кресла-кушетки

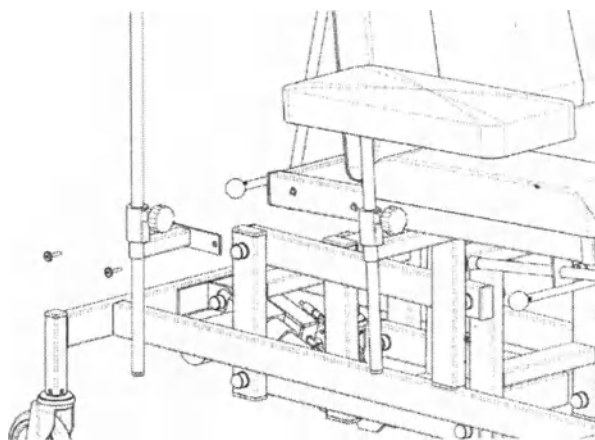
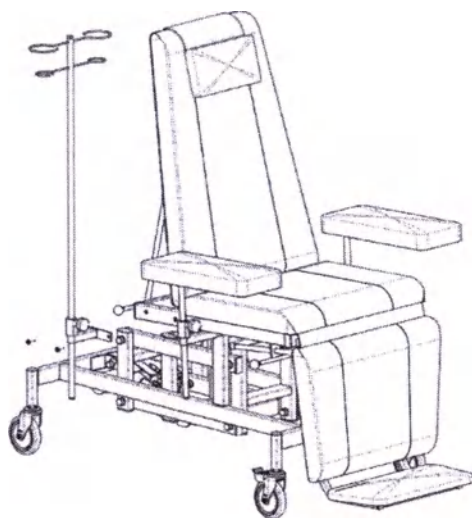


Схема установки штатива (справа) на примере Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур К03, передвижная

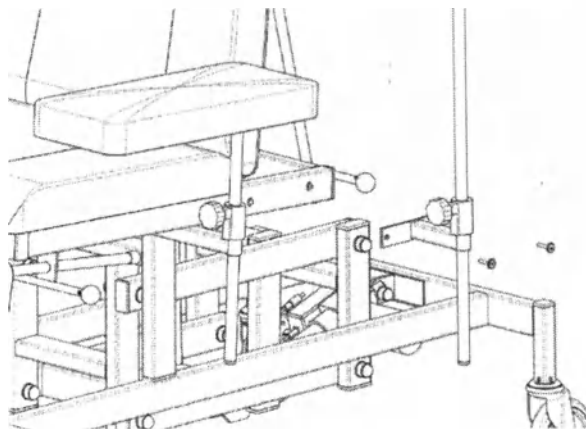
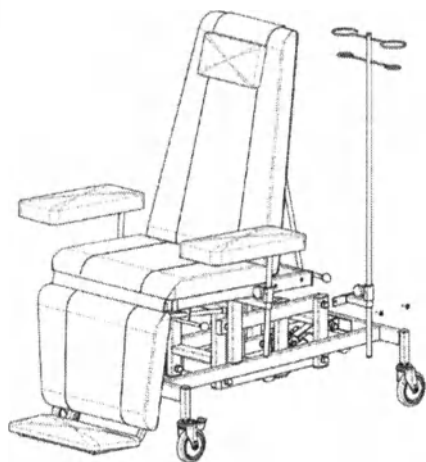


Схема установки штатива (слева) на примере Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур К03, передвижная

Кушетку необходимо разместить таким образом, чтобы не создавать трудностей при работе с ней и не создавать трудностей для размещения пациента.

Проведите санитарную обработку поверхности кушетки перед применением.

Во время работы с изделием оно должно быть зафиксировано, чтобы минимизировать риск травмы пациента.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: использование неисправленного изделия.

Производитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соответствии с предусмотренным назначением. Изготовитель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с инструкциями данными в руководстве. Производитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неоригинальных элементов и запасных частей.

При первоначальном и перед каждым применением изделия пользователю необходимо убедиться в том, что:

- колеса с тормозом заблокированы (для передвижных вариантов исполнения изделия);
- отсутствуют препятствия (конечности пациента, предметы, дополнительное оборудование, и т.п.) мешающие регулировке изделия;
- все регулировочные функции изделия проверены и действуют исправно.

Только после этого можно приступить к использованию по назначению кушетки.

Разместите пациента в сидячем или лежащем положении для проведения медицинского осмотра, терапии или проведения медицинских исследований и процедур.

Рекомендации по использованию составляющих кушетки (при наличии в составе изделия):

Штатив. Регулировка по высоте — ослабить барашек - отрегулировать на нужную высоту - затянуть барашек.

Штатив необходим при проведении капельниц (инфузионных вливаний). Максимальная нагрузка согласно таблице 2.

Держатель для одноразового полотенца-простыни. Регулировок нет. Держатель необходим при использовании одноразовых полотенец для гигиены

Ручка для перевозки кресла-кушетки. Регулировок нет. Используется для удобного перемещения кресла-кушетки.

Откидная подушка. При заказе изделия в составе с откидной подушкой, она установлена. В случае необходимости она легко снимается и устанавливается — крепеж «липучка». Используется для удобства размещения пациента.

Подлокотники. Регулировка по высоте — ослабить барашек - отрегулировать на нужную высоту - затянуть барашек. Используются для удобства размещения пациента при осмотре и проведении медицинских процедур.

Подножка для ног. Подножка для ног используется для удобства пациента (поддерживает ноги пациента), имеет регулировку по вылету — ослабляем барашек — увеличиваем или уменьшаем вылет — затягиваем барашек.

Процедура завершения работы.

После проведения процедур на кушетки необходимо установить изделие в первоначальное положение, установить блокировку колес (для передвижных вариантов исполнения изделия).

13. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности).

Срок службы до списания изделий – 5 лет.

14. Условия хранения и транспортировки.

14.1 Изделия должны транспортироваться и храниться упакованными в потребительскую тару.

14.2 Транспортирование изделий осуществляется транспортом любого вида в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.3 Транспортирование изделий в климатическом исполнении для условий хранения 5 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С, относительная влажность 100 % при 25 °С).

14.4 Условия хранения — в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150 (температура окружающего воздуха — от 5 °С до 40 °С, относительная влажность воздуха — 80 % при 25 °С).

15. Техническое обслуживание.

Регулярная проверка (осмотр)

Для более безопасного использования изделия пользователь может проводить регулярный осмотр в соответствии с инструкциями ниже. Один раз в сутки, перед использованием.

План регулярных проверок пользователя:

Проверка/калибровка	Период
Внешний вид Проверить наличие физических повреждений изделия	Один раз в сутки, перед использованием
Проверка всех регулировочных функций изделия	Один раз в сутки, перед использованием

Для безопасной эксплуатации рекомендуется выполнять процедуры регулярного осмотра.

Техническое обслуживание изделия должно производиться квалифицированным персоналом один раз в год.

техническое обслуживание могут предоставлять исключительно авторизованные сервисные центры и организации. При проведении технического обслуживания необходимо зафиксировать изделие в начальном положении.

В случае отказа изделия или его неисправности в течение гарантийного срока предприятие - Владелец» должно направить в адрес предприятия-изготовителя следующие документы: заявку на ремонт (замену) с указанием своего адреса и контактного телефона; гарантийный талон, оформленный, со своей стороны.

Все предоставленные рекламации регистрируются «Владельцем» в табл.3.

Таблица 3

Дата возник. неисправности.	Кол-во отработ.час. до возник. неспр.	Краткое описание неисправности	Дата направления рекламации	Меры, принятые по рекламации	Примеч.

При обнаружении неисправности, сбоя в работе изделия, отклонений в функционировании и по вопросам рекламации следует обратиться к производителю по следующему адресу:

ООО «Инмедикс»,
192236, город Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 38, корпус 2, лит. А, квартира 61
по эл. почте: info@inmedix.ru

Чистка и дезинфекция

ВНИМАНИЕ! Отсутствие регулярных проверок и технического обслуживания может стать причиной поломки изделия. Ненадлежащее техническое обслуживание может стать причиной поломки изделия, получения серьезных травм и повреждений при эксплуатации кушетки.

Чистка и дезинфекция:

Соблюдайте инструкции ниже для обеспечения надлежащей чистки и дезинфекции оборудования. Периодичность чистки и дезинфекции: После каждого пациента или ежедневно при использовании одноразовой простыни, зарегистрированной в РФ в установленном порядке.

Инструменты для чистки: чистая вата или губка.

Моющее средство: 3 % раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». (по МУ 287-113)

Процесс чистки: смочить чистую вату или губку раствором перекиси водорода с моющим средством и почистить внешние части изделия

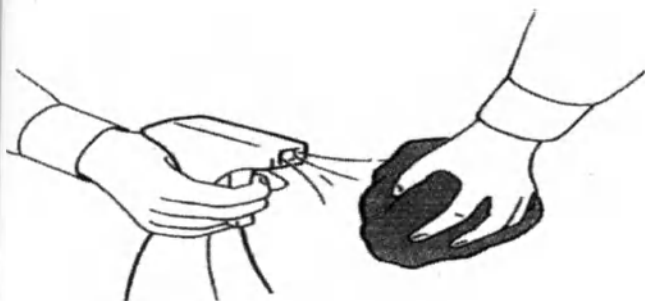


Рисунок 1. Как пользоваться дезинфицирующим аэрозолем.

ВНИМАНИЕ! Запрещается разбрызгивать дезинфицирующую жидкость непосредственно на изделие. Запрещается допускать проникновение любых жидкостей в изделие через отверстия и разоры. Игнорирование предупреждений может стать причиной поломок кушеток, получения серьезных травм и повреждений при эксплуатации.

Необходимость калибровки для обеспечения надлежащей и безопасной работы медицинского изделия в течение срока его службы: Не требуется

Методы снижения рисков, связанных с установкой, калибровкой или техническим обслуживанием медицинского изделия:

Не требуется

16. Указание, при необходимости, специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованных медицинских изделий (утилизация).

Утилизация изделий, принадлежностей и элементов их упаковки в медицинских организациях осуществляется в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21.

Утилизация изделия, после окончания срока эксплуатации включает в себя: разборку, очистку от остатков рабочей среды и загрязнений, просушку и сортировку материалов. Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

17. Маркировка

17.1 Маркировка изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 и содержать следующую информацию:

- ☐ наименование и адрес фирмы-изготовителя;
- ☐ наименование изделия;
- ☐ обозначение настоящих технических условий;
- ☐ партия или серия и/или серийный номер;
- ☐ дата изготовления (месяц и год);
- ☐ габаритные размеры изделия;
- ☐ максимальная нагрузка;
- ☐ номер регистрационного удостоверения (при получении).

Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур
по ТУ 32.50.30-008-34960786-2023



Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур К03, передвижная, в составе:

1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур К03, передвижная – 1 шт.;
2. Подлокотники тип 1 – 2 шт.;
3. Подножка – 1 шт.;
4. Штатив – 1 шт.;
5. Ручка для перевозки кушетки – 1 шт.;
6. Держатель для одноразового полотенца-простыни – 1 шт.;
7. Откидная подушка – 1 шт.;

 ООО «Имезис»
192236, город Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 38,
корпус 2, лит. А, квартира 61

 xx.xxxx **SN** xxxxxx

Габаритные размеры изделия (дхшхв), мм
1910х990х680

Максимальная нагрузка, кг, не более
на ложе не более 160 кг
на спинную секцию - 50 кг
на ножную секцию - 50 кг

ПУ №

Макет маркировки медицинского изделия на примере Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур К03, передвижная

Составляющие изделия (подлокотник тип 1, подлокотник тип 2, подножка, штатив, ручка для перевозки кресла-кушетки, держатель для одноразового полотенца-простыни, откидная подушка) маркируются с указанием:

- ☐ наименование и адрес фирмы-изготовителя;
- ☐ наименование изделия;
- ☐ обозначение настоящих технических условий;
- ☐ партия или серия и/или серийный номер;
- ☐ дата изготовления (месяц и год);
- ☐ номер регистрационного удостоверения (при получении).

Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур
по ТУ 32.50.30-008-34960786-2023




Откидная подушка

 ООО «Имезис»
192236, город Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 38,
корпус 2, лит. А, квартира 61


 xx.xxxx **SN** xxxxxx

ПУ №


Макет маркировки откидной подушки

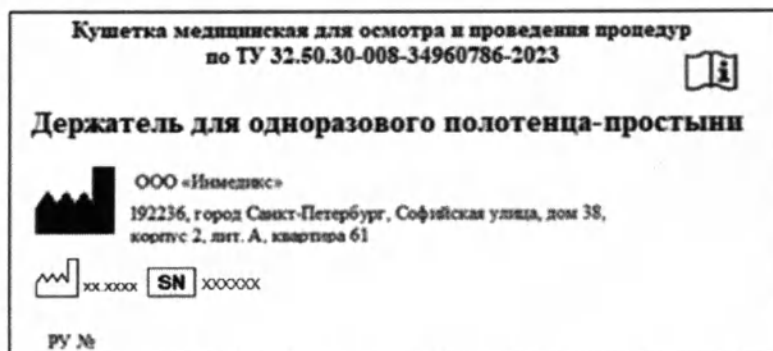

Макет маркировки держателя для одноразового полотенца-простыни

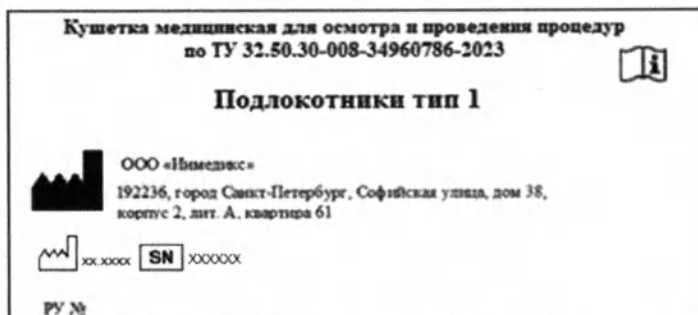


Макет маркировки подлокотника на примере подлокотника тип 1

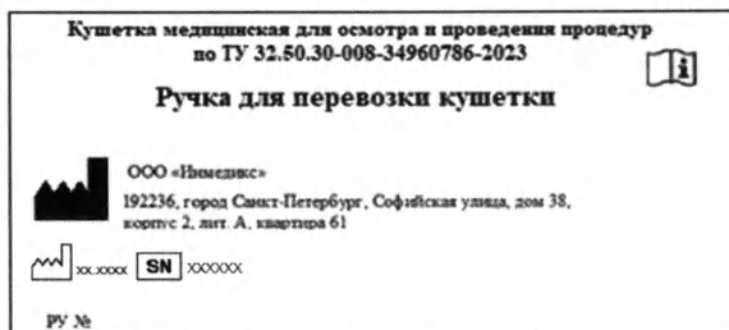

Макет маркировки ручки для перевозки кушетки



Макет маркировки подножки

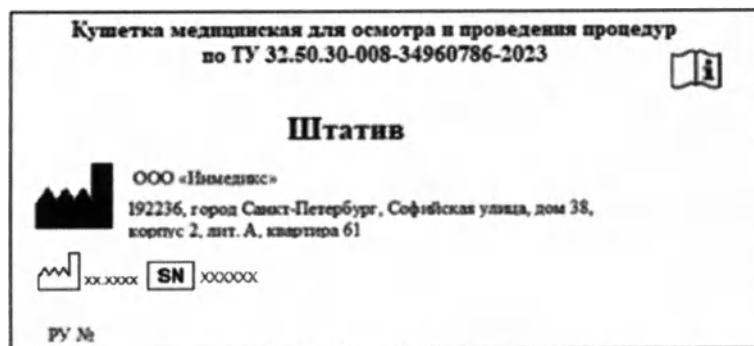

Макет маркировки штатива

17.2 Транспортная маркировка выполнена по ГОСТ 14192.

17.2.1 Маркировка должна быть выполнена типографским, литографическим или печатным способом на бумажном ярлыке, прочно приклеенном к упаковке, с указанием:

- ☐ наименование продукции;
- ☐ наименование и местонахождение предприятия-изготовителя (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а));
- ☐ масса и дополнительная информация (при наличии);
- ☐ дата изготовления (месяц, год);
- ☐ номер партии или серийный номер (при наличии);
- ☐ условия хранения и транспортирования;
- ☐ обозначение настоящих технических условий;
- ☐ номер регистрационного удостоверения и дата выдачи (при получении);
- ☐ меры безопасности (при необходимости);
- ☐ масса брутто.

На упаковку изделий должна быть нанесена транспортная маркировка и манипуляционные знаки, имеющие значение «Не допускать воздействия влаги», «Верх».

17.3 Маркировка должна оставаться четкой и различимой в условиях нормального применения и должна быть стойкой к воздействию средств очистки.

**Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур
по ТУ 32.50.30-008-34960786-2023**

Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур К03, передвижная, в составе:

1. Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур К03, передвижная – 1 шт.;
2. Подлокотники тип 1 – 2 шт.;
3. Подножка – 1 шт.;
4. Штатив – 1 шт.;
5. Ручка для перевозки кушетки – 1 шт.;
6. Держатель для одноразового полотенца-простыни – 1 шт.;
7. Откидная подушка – 1 шт.;



ООО «Имедикус»

192236, город Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 38,
корпус 2, лит. А, квартира 61

Место производства: ООО «Имедикус»,
РФ, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское
городское поселение, деревня Новосаратовка, ул. Покровская дорога, дом 34,
корпус 2



xx.xxxx




XXXXXX

Масса 47 кг

Масса брутто 50 кг



ХРАНЕНИЕ

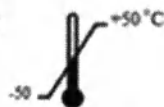

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ



Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия на примере Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур К03, передвижная

Описание символов и знаков, нанесенных на медицинское изделие и транспортную упаковку

	Дата изготовления
	Изготовитель
	Серийный номер
	Верх
	Температурный диапазон

	Не допускать воздействия влаги
РУ №	Регистрационное удостоверение №

18. Упаковка

Изделия поставляются к потребителю в собранном виде. Перед упаковкой изделия законсервированы по ГОСТ 9.014 для группы изделий П-1 и условий хранения Ж.

Упаковка гарантирует достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения изделий во время хранения и транспортирования до места назначения.

Транспортная тара соответствует требованиям ГОСТ Р 52901.

Габаритные размеры и масса упаковки по вариантам исполнения изделия:

- К01, К01У, К02, К02У, К06, К07, К10, К11: габаритный размер (дхшхв, мм) 1510х700х100 мм±5%, объём 0,11 м³±5%, масса упаковки 1,5 кг±5%.

- К04, К05, К08, К09 габаритный размер (дхшхв, мм) 1520х850х140 мм±5%, объём 0,18 м³±5%, масса упаковки 1,8 кг±5%.

- К03 - габаритный размер (дхшхв, мм) 900х800х750 мм±5%, объём 0,6 м³±5%, масса упаковки 2,3 кг±5%.

19. Свидетельство о приемке

Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур по ТУ 32.50.30-008-34960786-2023

№ _____

(партия или серия и/или серийный номер)

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления «.....» 20.....г

Представитель ТК _____

МП

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

20. Гарантии изготовителя

20.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

20.2 Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения изделий - 5 лет со дня изготовления.

Общие положения (рекомендации): текущий ремонт производится специалистами предприятия-изготовителя.

20.3 Запрещается потребителю самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

21. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур по ТУ 32.50.30-008-34960786-2023

Вариант исполнения:

№ Дата изготовления « » 20 г.

М.П. предприятия-изготовителя

1. Приобретен

(дата, подпись и штамп торгующего предприятия)

2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли (заполняется «Владельцем»):

.....
.....
.....
.....

3. Заключение предприятия-изготовителя:

.....
.....
.....

4. Выполненные работы

.....
.....
.....

Руководитель
предприятия - «Владелец»

.....
«. . .». 20 . . . г.
М.П.

Руководитель
предприятия – изготовителя

.....
«. . .». 20 . . . г
М.П.

22. Перечень применяемых производителем (изготовителем) медицинского изделия национальных стандартов

Обозначение	Наименование
ГОСТ 9.032-74	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями N 1-4)
ГОСТ 9.301-86	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования (с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические условия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
МУ-287-113	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.
ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия.
ГОСТ 19917-2014	Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия
ГОСТ 8.453-82	Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки.
ГОСТ 12.4.021-75	Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.
ГОСТ 12.1.005-88	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1).
ГОСТ ISO 14971-2021	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.
ГОСТ 9.104-2018	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.014-78	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (С Изменениями N 1-6)
ГОСТ Р 27.013-2019	Надежность в технике. Методы оценки показателей безотказности
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
ГОСТ 19918.3-79	Мебель для сидения и лежания. Метод определения остаточной деформации беспружинных мягких элементов
ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 5378-88	Угломеры с нониусом. Технические условия
ГОСТ 13837-79	Динамометры общего назначения. Технические условия

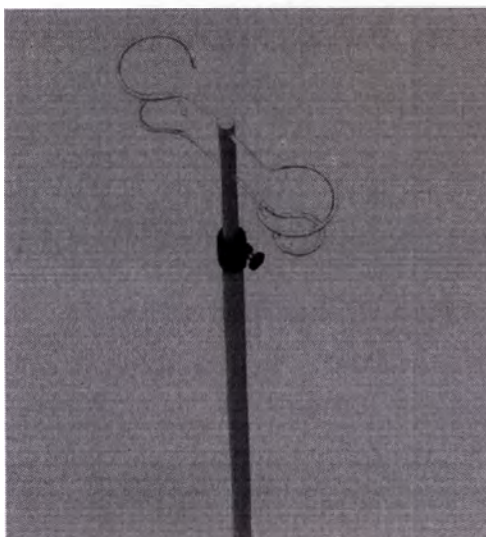


Рисунок 1- Штатив



Рисунок 2- Ручка для перевозки кушетки

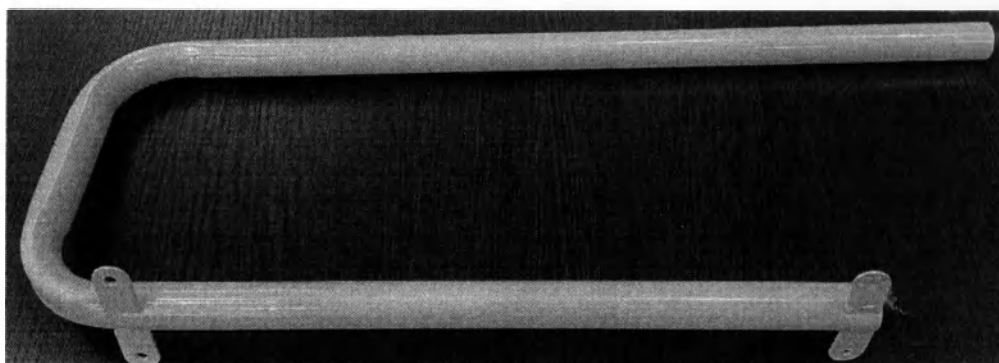


Рисунок 3- Держатель для одноразового полотенца-простыни



Рисунок 4- Откидная подушка

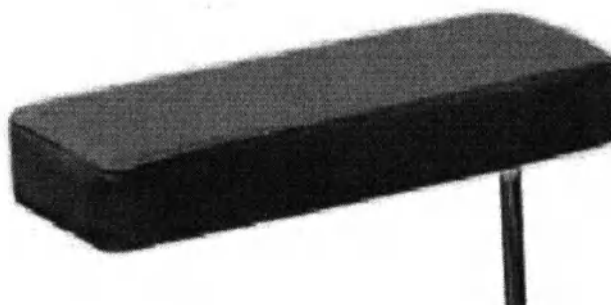


Рисунок 5- Подлокотники тип 1



Рисунок 6- Подлокотники тип 2

Прошито и пронумеровано 1
Генеральный директор ООО «Инмедикс»
Костева М.В.

