

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «АРКОМ»

Селезнев Р. Ю.

20 марта 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями»,

производства «bredent medical GmbH & Co. KG (бредент медикал ГмбХ & Ко. КГ), Германия



Фото 1.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения copaSKY имплантат 3.5, длина 8 мм. Вид в защитной



(DE) Gebrauchsanweisung copaSKY Implantate Titan, zweiteilig

000994EX-20190528



CE 0483

Bitte diese Gebrauchsanweisung vor dem Produkteinsetzen sorgfältig lesen.
Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, lehnt der Hersteller jede Haftung ab.

1. Produktbeschreibung

Das copaSKY Implantat ist ein zylindrisches Dentalimplantat mit selbstschneidendem Gewinde zur Insertierung in den Kieferknochen. Die copaSKY Implantate sind in verschiedenen Durchmessern und Längen verfügbar. Zur peripheren Versorgung werden die für copaSKY Implantate vorgesehenen Gingivalförm, Abutments und Attachments verwendet. Zudem können die physiologischen Werkstoffe des SKY Systems verwendet werden.

2. Indikation / Einsatzbereich

- Die copaSKY Implantate dienen zur Wiederherstellung der Kaufunktion.
- copaSKY Implantate in den Längen 8 mm, 10 mm, 12 mm und 14 mm werden empfohlen für:
 - Sofort-, Früh-, Spätbelastung
 - Einzelzahnversorgung, Pfeilervermehrung, Schattstücke und zahnloser Kiefer
 - Festständer und herausnehmbare Zahnersatz im gesamten Kiefer
- Die copaSKY Implantate in der Länge 3,2 mm werden empfohlen für:
- Einzelkronen in zahnbegrenzten Lücken, in Freirandpositionen ist Zahn für Zahn zu versorgen.
 - Brückenversorgungen: Hierbei ist das Verhältnis von min. zwei Pfeilern zu einem Brückenglied einzuhalten
 - Herausnehmbare, schleimhauttragende Versorgungen im unbezahnten Kiefer: Für diese Versorgungen sind mindestens vier Implantate im Unterkiefer und sechs Implantate im Oberkiefer zu inserieren.



Bild 3
g) Nach einer
nützlichen
eingeschraubt
und 14 mm /
Osteointegra



7. Technisch
REF
copa3508

3.5

8.0 mm

REF copa3508

LOT 836894

2022-02-21

2027-01-31

STERILE A

qty 1

MD

HIBC

MD

http://ifu.bredent-group.com/

CE 0483

(M1) Dental implant
 (M2) Dental implant
 (M3) Dental implant
 (M4) Dental implant
 (M5) Dental implant
 (M6) Dental implant
 (M7) Dental implant
 (M8) Dental implant
 (M9) Dental implant
 (M10) Dental implant
 (M11) Dental implant
 (M12) Dental implant
 (M13) Dental implant
 (M14) Dental implant
 (M15) Dental implant
 (M16) Dental implant
 (M17) Dental implant
 (M18) Dental implant
 (M19) Dental implant
 (M20) Dental implant
 (M21) Dental implant
 (M22) Dental implant
 (M23) Dental implant
 (M24) Dental implant
 (M25) Dental implant
 (M26) Dental implant
 (M27) Dental implant
 (M28) Dental implant
 (M29) Dental implant
 (M30) Dental implant
 (M31) Dental implant
 (M32) Dental implant
 (M33) Dental implant
 (M34) Dental implant
 (M35) Dental implant
 (M36) Dental implant
 (M37) Dental implant
 (M38) Dental implant
 (M39) Dental implant
 (M40) Dental implant
 (M41) Dental implant
 (M42) Dental implant
 (M43) Dental implant
 (M44) Dental implant
 (M45) Dental implant
 (M46) Dental implant
 (M47) Dental implant
 (M48) Dental implant
 (M49) Dental implant
 (M50) Dental implant
 (M51) Dental implant
 (M52) Dental implant
 (M53) Dental implant
 (M54) Dental implant
 (M55) Dental implant
 (M56) Dental implant
 (M57) Dental implant
 (M58) Dental implant
 (M59) Dental implant
 (M60) Dental implant
 (M61) Dental implant
 (M62) Dental implant
 (M63) Dental implant
 (M64) Dental implant
 (M65) Dental implant
 (M66) Dental implant
 (M67) Dental implant
 (M68) Dental implant
 (M69) Dental implant
 (M70) Dental implant
 (M71) Dental implant
 (M72) Dental implant
 (M73) Dental implant
 (M74) Dental implant
 (M75) Dental implant
 (M76) Dental implant
 (M77) Dental implant
 (M78) Dental implant
 (M79) Dental implant
 (M80) Dental implant
 (M81) Dental implant
 (M82) Dental implant
 (M83) Dental implant
 (M84) Dental implant
 (M85) Dental implant
 (M86) Dental implant
 (M87) Dental implant
 (M88) Dental implant
 (M89) Dental implant
 (M90) Dental implant
 (M91) Dental implant
 (M92) Dental implant
 (M93) Dental implant
 (M94) Dental implant
 (M95) Dental implant
 (M96) Dental implant
 (M97) Dental implant
 (M98) Dental implant
 (M99) Dental implant
 (M100) Dental implant

bredent medical GmbH & Co. KG | Weissenhofer Str. 2 | 82230 Senden | Germany

T: +49 7209 872-400 | F: +49 7209 872-895

www.bredent-medical.com | info-medical@bredent.com

bredent medical

- имплантат – 1 шт.;
- винт имплантата покрывной – 1 шт.;
- идентификационные наклейки – 4 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия.

Общий вид изделия актуален для вариантов: - сораSKY имплантат 3.5, длина 10 мм; - сораSKY имплантат 3.5, длина 12 мм.

Отличие только в длине и маркировки.



Фото 1.3. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения copaSKY имплантат 3.5, длина 8 мм. Вид во вторичной и

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU вид вторичной и третичной упаковке идентичен для вариантов: - copaSKY имплантат 3.5, длина 10 мм; - copaSKY имплантат 3.5, длина 12 мм. Отличие только в маркировке.



Фото 1.4. Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями, вариант исполнения сораSKY имплантат 3.5, длина 8 мм. Внешний вид упаковки. Внешний вид изделия и первичная упаковка идентична для вариантов: - сораSKY имплантат 3.5, длина 10 мм; - сораSKY имплантат 3.5, длина 12 мм. Отличие только в длине.



Фото 2.1. Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями, вариант исполнения: сораSKY имплантат 3.5, длина 14 мм. Вид в защитной



CE 0483



009996X5-2020030
(RU) Instructions for use (printed version not valid for EU and Canada)
(Только для Казахстана, не для России)
(KZ) Пайдалану жөйдегі нұсқаулық
(TR) Kullanım kılavuzu

(EN) Instructions for use

copaSKY implants, titanium, two-piece

Before using the product, please read these instructions for use carefully.

The products may only be used by adequately trained staff in accordance with their intended purpose. The manufacturer will not accept any liability for damage resulting from non-compliance with these instructions for use.

1. Description of the product

These instructions for use apply to the implants listed in item 6.

The copaSKY implants are cylindrical dental implants with self-tapping double thread, delivered in sterile condition, for long-term use in the upper and/or lower jaw, which can be placed in the bone by surgical insertion as a single piece or two-piece implant. The implants are made of titanium grade 4 and have a sandblasted and etched surface. They are available in different lengths and diameters.

2. Intended purpose

The implant is used, as a component of a dental restoration, to restore and/or correct the function, phonetics and esthetics of the dentition and/or lost teeth. copaSKY implants are used for fixation and attachment of prosthesis restorations and for preservation of hard and soft tissue.



CE 0483



<http://ifu.bredent-group.com/>

(RU) Conformité
(RU) Dental report
(RU) Implant design
(RU) Implant details
(RU) Implantation
(RU) Patient information
(RU) Patient consent
(RU) Patient follow-up
(RU) Patient education

(RU) Dental report
(RU) Dental report
(RU) Dental report
(RU) Dental report
(RU) Dental report
(RU) Dental report
(RU) Dental report
(RU) Dental report

(RU) Dental report
(RU) Dental report
(RU) Dental report
(RU) Dental report
(RU) Dental report
(RU) Dental report
(RU) Dental report
(RU) Dental report



bredent medical GmbH & Co. KG | Weissenburger Str. 21 | 82259 Senden | Germany
T: +49 7268 872-400 | F: +49 7268 872-409
www.bredent-medical.com | info-medical@bredent.com

bredent

copa SKY

3.5

14.0 mm

REF 841597

LOT 841597

2022-08-23

2027-07-31

STERILE R

Qty 1

MD

HIBC

009996X5-2020030

- винт имплантата покрывной – 1 шт.;
- идентификационные наклейки – 4 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия.



Фото 2.3. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 3.5, длина 14 мм. Вид во вторичной и



Фото 2.4. Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями, вариант исполнения: сораSKY имплантат 3.5, длина 14 мм. Внешний вид



Фото 3.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 4.0, длина 5.2 мм. Вид в защитной упаковке. Внешний вид защитной упаковки идентичен для вариантов: -copaSKY имплантат 4.0, длина 8 мм; - copaSKY имплантат 4.0, длина 10 мм; - copaSKY имплантат 4.0, длина 12 мм. Отличие только в маркировке.



Фото 3.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 4.0, длина 5.2 мм, в составе:

- идентификационные наклейки – 4 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия.

Общий вид изделия актуален для вариантов: -сopaSKY имплантат 4.0, длина 8 мм; - сopaSKY имплантат 4.0, длина 10 мм; - сopaSKY имплантат 4.0, длина 12 мм.

Отличие только в длине и маркировки.



Фото 3.3. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 4.0, длина 5.2 мм. Вид во вторичной упаковке идентичен для вариантов: -copaSKY имплантат 4.0, длина 8 мм; - copaSKY имплантат 4.0, длина 10 мм; - copaSKY имплантат 4.0, длина 12 мм. Отличие только в маркировке.


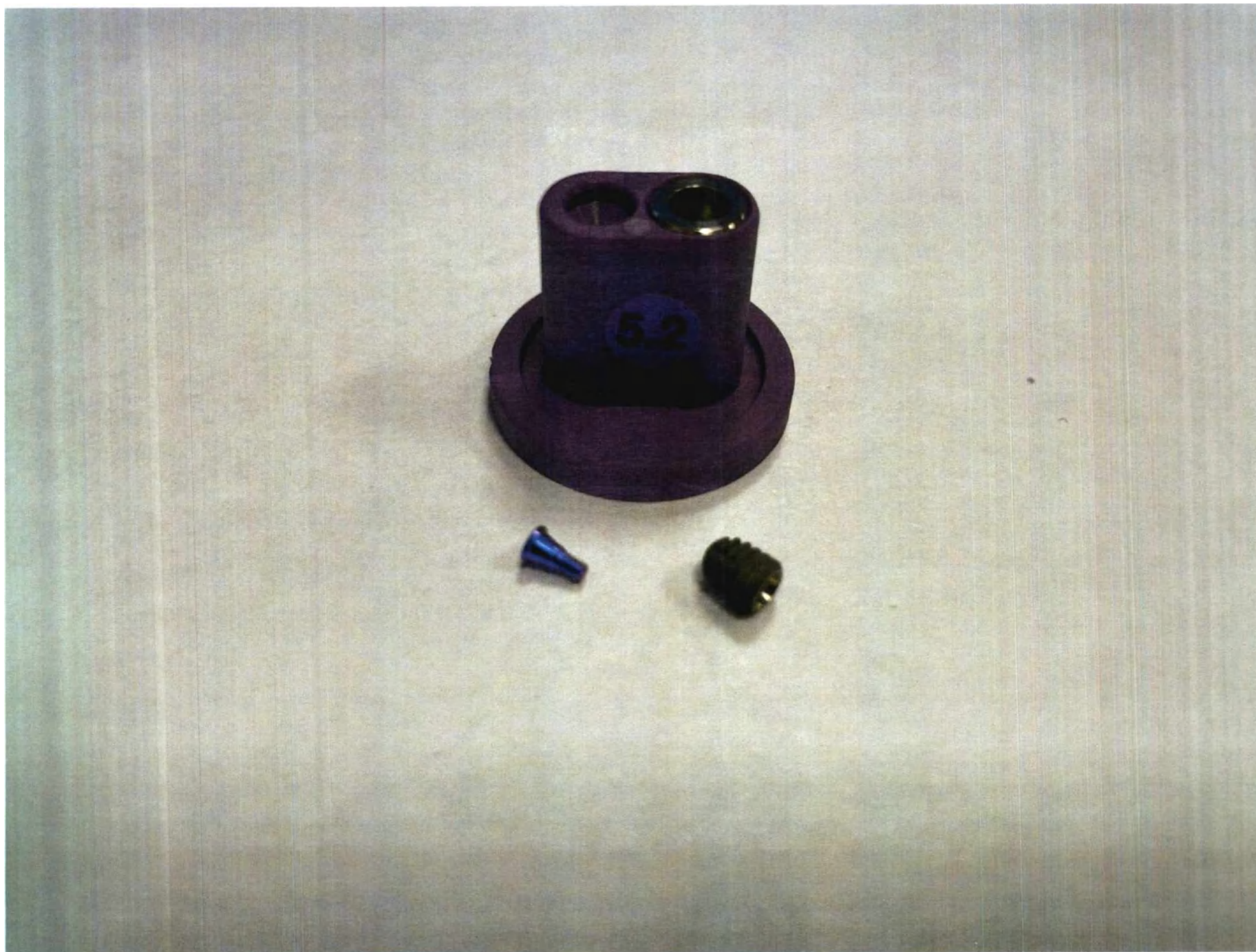


Фото 3.4. Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями, вариант исполнения сораSKY имплантат 4.0, длина 5.2 мм. Внешний вид
всех. Внешний вид изделия и первичная упаковка идентична для вариантов: -сораSKY имплантат 4.0, длина 8 мм; -
сораSKY имплантат 4.0, длина 10 мм; - сораSKY имплантат 4.0, длина 12 мм. Отличие только в длине.



Фото 4.1. Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями, вариант исполнения: сораSKY имплантат 4.0, длина 14 мм. Вид в защитной упаковке.

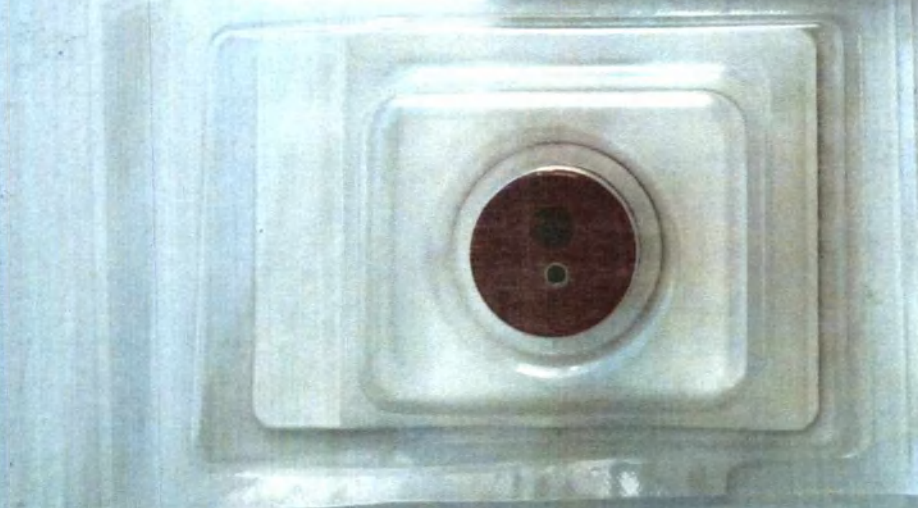

(DE) Gebrauchsanweisung
copaSKY Implantate Titan, zweiteilig

Bitte diese Gebrauchsanweisung vor dem Produkteinsatz ausführlich lesen.
Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, lehnt der Hersteller jede Haftung ab.

000894EX-21 000528

  0483

2. Indikation / Einsatzbereich
Die copasoft® Implantate dienen zur Wiederherstellung der Kaufunktion. Die copasoft® Implantate sind in den Längen 8 mm, 10 mm, 12 mm und 14 mm werden empfohlen für:

- Sofort-, Früh-, Spätspeisung
- Einzelzahnimplantate, Heilvermehrung, Schallücke und zahnloser Kiefer
- Feststehender und herausnehmbarer Zahnersatz im gesamten Kiefer

Die copasoft® Implantate in der Größe 5, 2 mm werden ebenfalls für:

- Einzelzähne in zahnbegrenzten Lücken, in Fremdstationen ist Zahn für Zahn zu versorgen.
- Brückenversorgungen: Hierbei ist das Verhältnis von min. zwei Pfeilern zu einem Brückenglied einzuhalten.
- Herausnehmbare, schleimhautgetragene Versorgungen im unbezahnnten Kiefer: Für diese Versorgungen sind mindestens vier Implantate im Unterkiefer und sechs Implantate im Oberkiefer zu setzen.



Фото 4.2. Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями, вариант исполнения: сораSKY имплантат 4.0, длина 14 мм, в составе:

- имплантат – 1 шт.;
- винт имплантата покрывной – 1 шт.;
- идентификационные наклейки – 4 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия.



Фото 4.3. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 4.0, длина 14 мм. Внешний вид вторичной и третичной упаковки. Отличие только в маркировке.



Фото 4.3. Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями, вариант исполнения сораSKY имплантат 4.0, длина 14 мм. Внешний вид



Фото 5.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 4.5, длина 5.2 мм. Вид в защитной упаковке идентичен для вариантов: - copaSKY имплантат 4.5, длина 8 мм; - copaSKY имплантат 4.5, длина 10 мм; - copaSKY имплантат 4.5, длина 12 мм. Отличие только в маркировке.

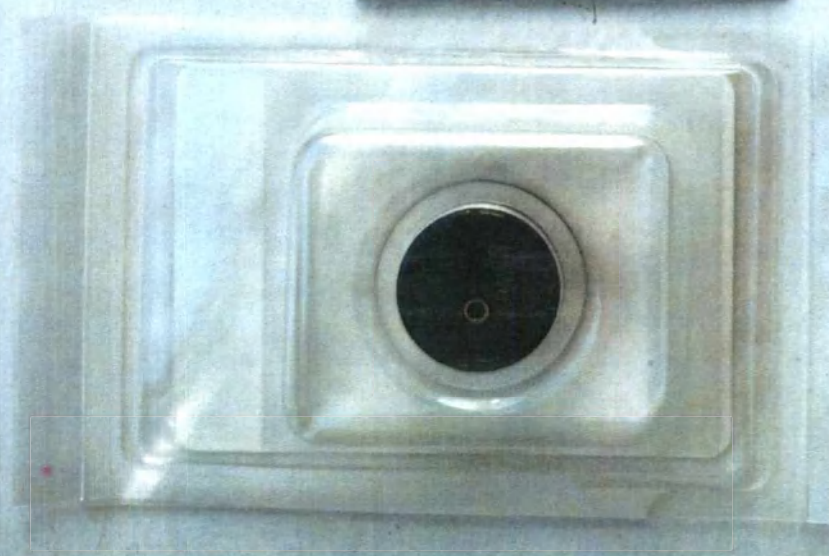


Фото 5.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 4.5, длина 5.2 мм, в составе:

- имплантат – 1 шт.:

- винт имплантата покрывной – 1 шт.;
- идентификационные наклейки – 4 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия.

Общий вид изделия актуален для вариантов: - сораSKY имплантат 4.5, длина 8 мм; - сораSKY имплантат 4.5, длина 10 мм; - сораSKY имплантат 4.5, длина 12 мм.

Отличие только в длине и маркировки.



Фото 5.3. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 4.5, длина 5.2 мм. Вид во вторичной

и третичной упаковке идентичен для вариантов: - copaSKY имплантат 4.5, длина 8 мм; - copaSKY имплантат 4.5, длина 10 мм; - copaSKY имплантат 4.5, длина 12 мм. Отличие только в маркировке.



Фото 5.4. Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями, вариант исполнения сораSKY имплантат 4.5, длина 5.2 мм. Внешний вид
 ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru зке. Внешний вид изделия и первичная упаковка идентична для вариантов: - сораSKY имплантат 4.5, длина 8 мм; -
 сораSKY имплантат 4.5 - длина 10 мм; - сораSKY имплантат 4.5 - длина 12 мм. Отличие только в длине.



Фото 6.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 4.5, длина 14 мм. Вид в защитной



- винт имплантата покрывной – 1 шт.;
- идентификационные наклейки – 4 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия.

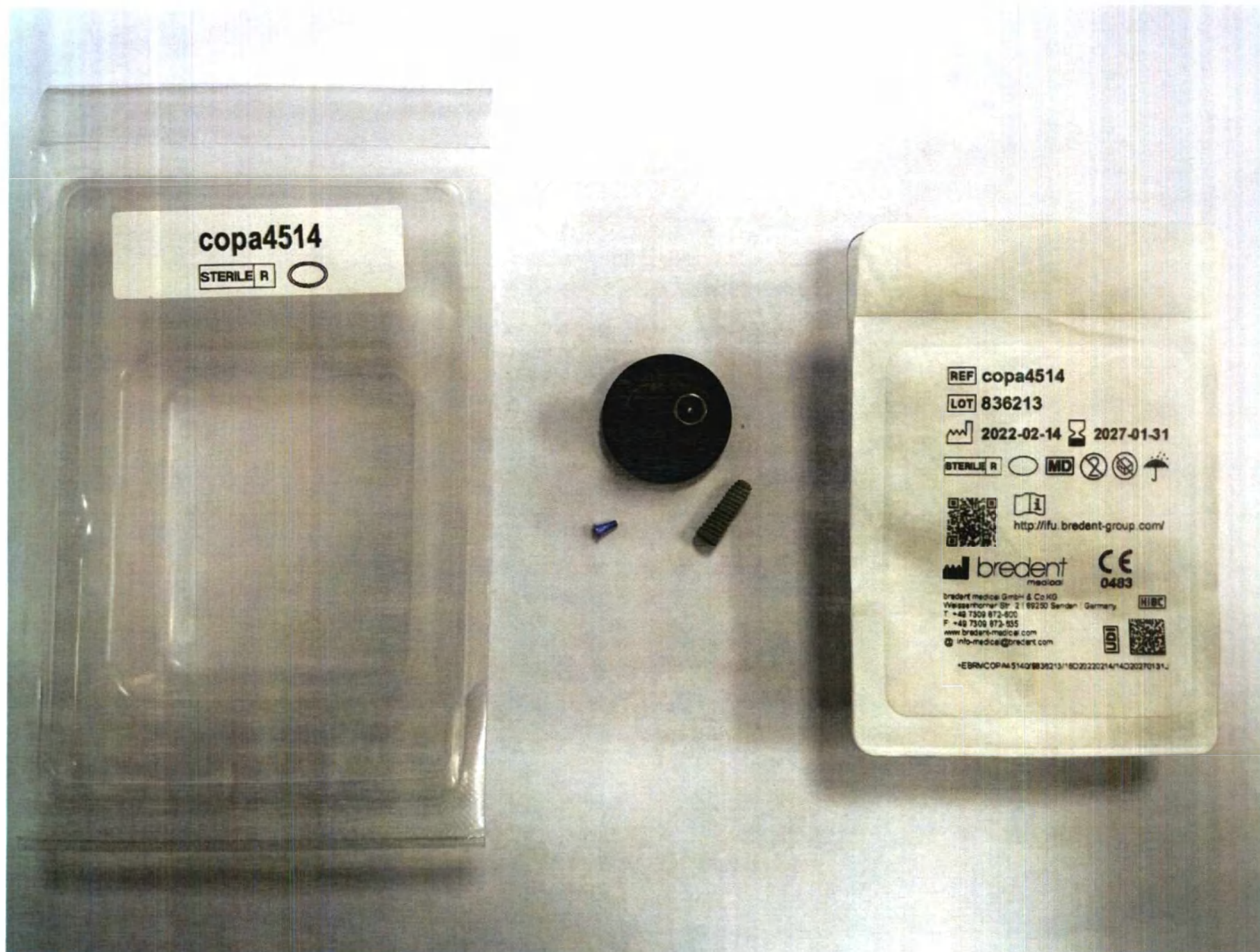


Фото 6.3. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 4.5, длина 14 мм. Внешний вид

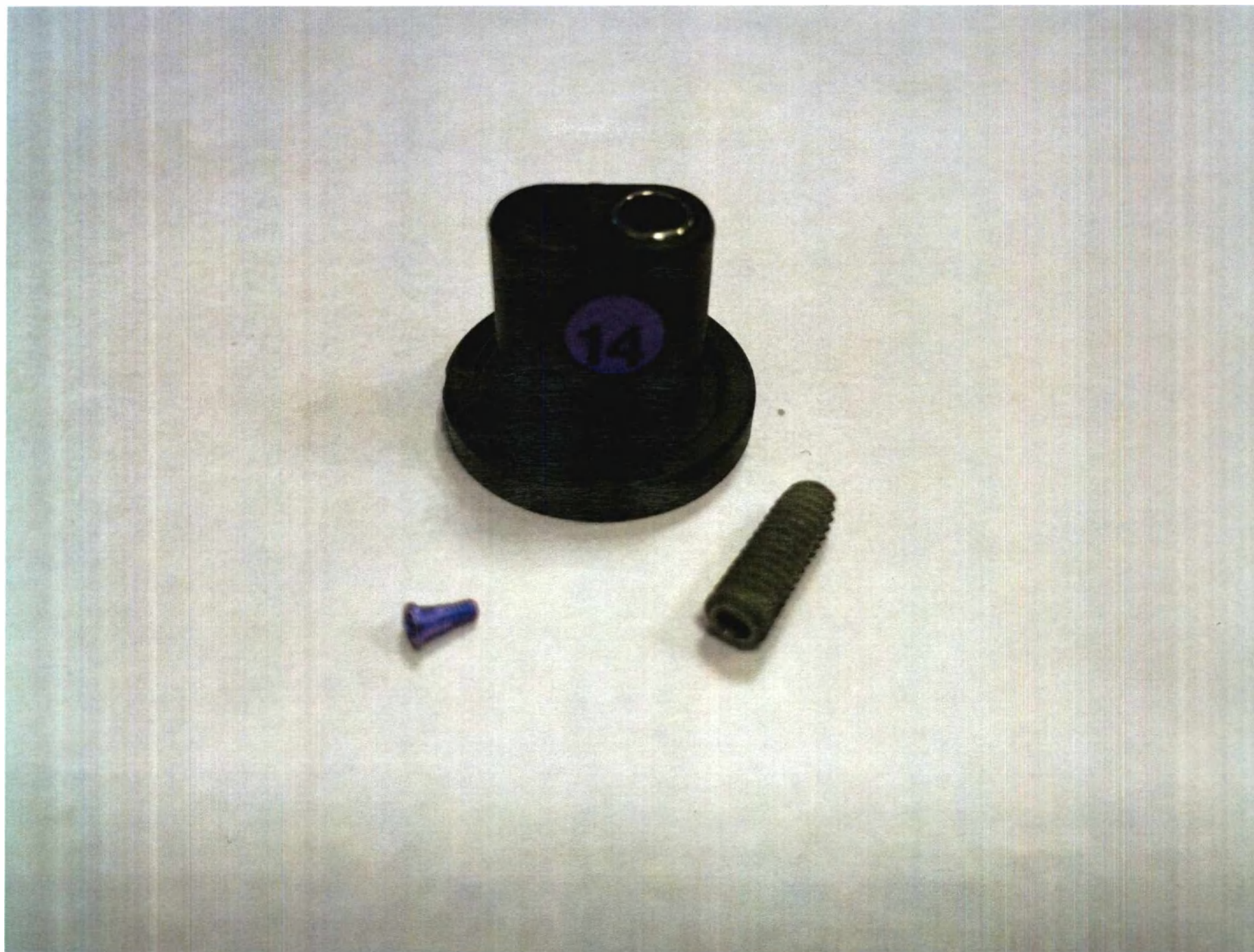


Фото 6.4. Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями, вариант исполнения сораSKY имплантат 4.5, длина 14 мм. Внешний вид



Фото 7.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 5.0, длина 5.2 мм. Вид в защитной упаковке. Внешний вид защитной упаковки идентичен для вариантов: - copaSKY имплантат 5.0, длина 8 мм; - copaSKY имплантат 5.0, длина 10 мм.



Фото 7.2. Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями, вариант исполнения: сораSKY имплантат 5.0, длина 5.2 мм, в составе:

- винт имплантата покрывной – 1 шт.;
- идентификационные наклейки – 4 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия.

Общий вид изделия актуален для вариантов: - сораSKY имплантат 5.0, длина 8 мм; - сораSKY имплантат 5.0, длина 10 мм.

Отличие только в длине и маркировки.



Фото 7.3. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 5.0, длина 5.2 мм. Вид во вторичной и третичной упаковке идентичен для вариантов: - copaSKY имплантат 5.0, длина 8 мм; - copaSKY имплантат 5.0, длина 10 мм. Отличие только в маркировке.



Фото 7.4. Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями, вариант исполнения сораSKY имплантат 5.0, длина 5.2 мм. Внешний вид изделия и вид в первичной упаковке. Внешний вид изделия и первичная упаковка идентична для вариантов: - сораSKY имплантат 5.0, длина 8 мм; - сораSKY имплантат 5.0, длина 10 мм. Отличие только в длине.

Titanimplantat crestal strukturiert
Titanium implant structured crestal area

copa
SKY 



osseo-connect-surface (ocs)[®]

5.0 12 mm

Bei aufgerissenem Siegel kann der Inhalt der Packung
nicht mehr zurückgenommen werden!
If the seal is broken, the contents can not be returned.
Lagerung trocken bei Raumtemperatur.
Storage dry at room temperature.

 2026-10  REF copa5012  LOT 835671

CE
0483



STERILE R



Qty: 1

bredent
medical



bredent medical GmbH & Co. KG | Weissenhorner Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: +49 7309 872-600 | F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com | @: info-medical@bredent.com

Фото 8.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 5.0, длина 12 мм. Вид в защитной



- идентификационные наклейки – 4 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия.


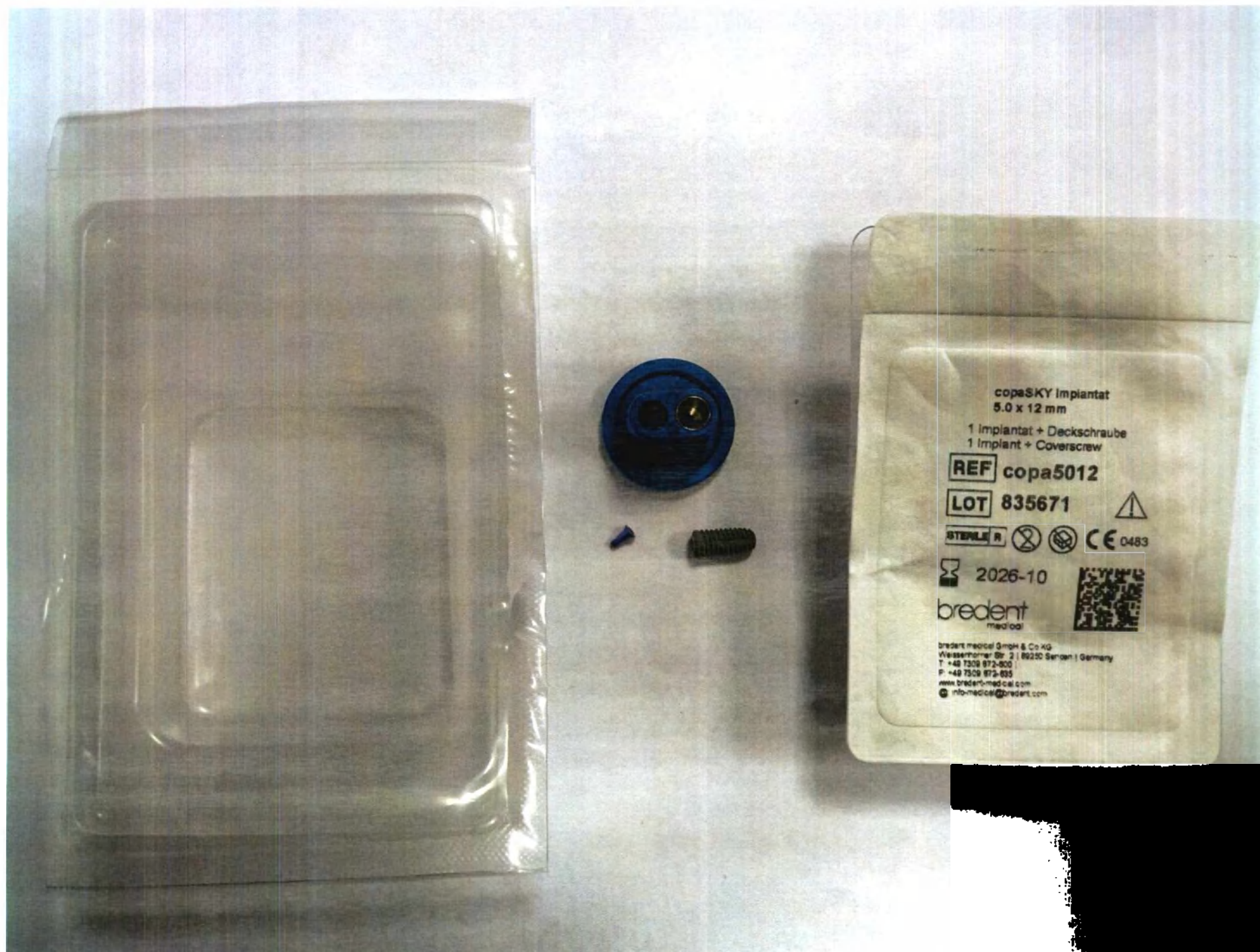




Фото 8.4. Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями, вариант исполнения сораSKY имплантат 5.0, длина 12 мм. Внешний вид

Titanimplantat crestal strukturiert
Titanium implant structured crestal area

copa
SKY 

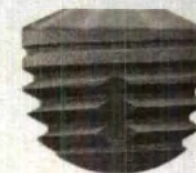

osseo-connect-surface (ocs)[®]

Bei aufgerissenem Siegel kann der Inhalt der Packung
nicht mehr zurückgenommen werden !
If the seal is broken, the contents can not be returned.
Lagerung trocken bei Raumtemperatur.
Storage dry at room temperature.

6.0 5.2 mm

 **2026-07**  **REF** **copa6005**  **LOT** **833652**


0483



STERILE R



Qty: 1

bredent
medical



bredent medical GmbH & Co. KG | Weissenhorner Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: +49 7309 872-600 | F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com | @: info-medical@bredent.com

Фото 9.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 6.0, длина 5.2 мм. Вид в защитной

chennekrose führen kann.

(DE) Gebrauchsanweisung

009896EX-20190528

copaSKY Implantate Titan, zweiteilig



CE
0483

Bitte diese Gebrauchsanweisung vor dem Produkteinsatz ausführlich lesen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, lehnt der Hersteller jede Haftung ab.

1. Produktbeschreibung

Das copaSKY Implantat ist ein zylindrisches Dentalimplantat mit selbstschneidendem Gewinde zur Inserierung in den Kieferknochen. Die copaSKY Implantate sind in verschiedenen Durchmessern und Längen verfügbar. Zur prothetischen Versorgung werden die für copaSKY Implantate geeigneten Gingivaformer, Abutments und Attachments verwendet. Zudem können die physiologischen Werkstoffe des SKY Systems verwendet werden.

2. Indikation / Einsatzbereich



Bild 3

g) Nach einer chirurgischen Eingriffs- und 14 mm Osseointeg

Titanimplantat crestal strukturiert
Titanium implant structured crestal area

osseo-connect-surface (ocs)[®]

copa
SKY



6.0 5.2 mm

Bei aufgerissenem Siegel kann der Inhalt der Packung nicht mehr zurückgenommen werden!

If the seal is broken, the contents can not be returned

Lagerung trocken bei Raumtemperatur

Storage dry at room temperature

2026-07 REF copa6005 LOT 833652

CE
0483



Qty: 1

bredent
medical



bredent medical GmbH & Co. KG | Weissenhorner Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: +49 7309 872-600 | F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com | @: info-medical@bredent.com

copaSKY Implantat

REF copa6005

LOT 833652

bredent
medical



copaSKY Implantat

REF copa6005

LOT 833652

bredent
medical



copaSKY Implantat

REF copa6005

LOT 833652

bredent
medical



Фото 9.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 6.0, длина 5.2 мм, в составе:

- идентификационные наклейки – 4 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия.

Общий вид изделия актуален для варианта: сораSKY имплантат 6.0, длина 8 мм.

Отличие только в длине и маркировки.



Фото 9.3. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 6.0, длина 5.2 мм. Внешний вид во



Фото 9.4. Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями, вариант исполнения сораSKY имплантат 6.0, длина 5.2 мм. Внешний вид



Фото 10.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 6.0, длина 8 мм. Вид в защитной

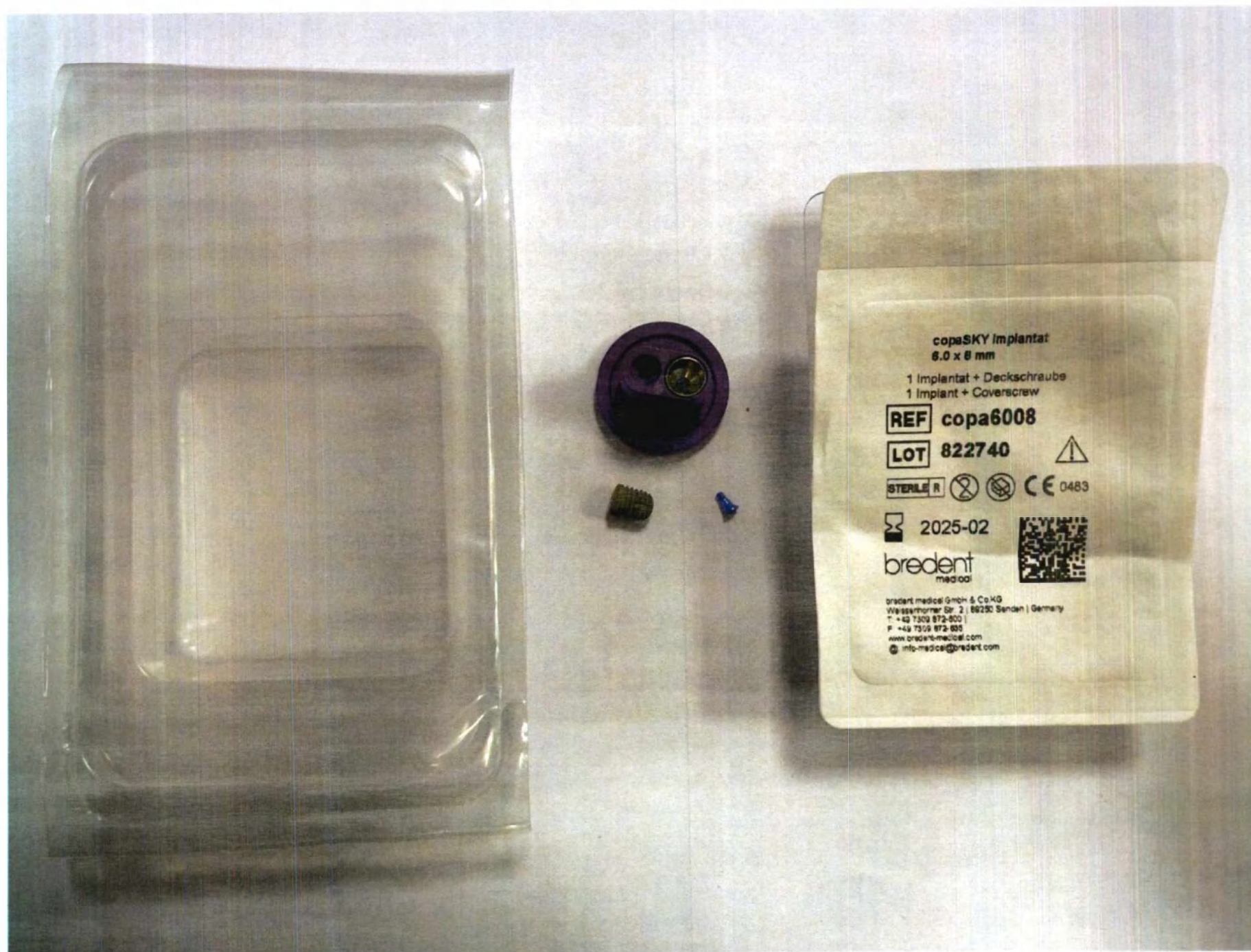


Фото 10.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY имплантат 6.0, длина 8 мм. Внешний вид во



Фото 10.3. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения copaSKY имплантат 6.0, длина 8 мм. Внешний вид



copaSKY Titanabutment 0° Höhe 3 mm

CE
0483

(EN) copaSKY titanium abutment 0° height 3 mm	(FR) copaSKY pilier en titane 0° hauteur 3 mm
(IT) copaSKY abutment in titanio 0° alt. 3 mm	(ES) copaSKY aditamento de titanio 0° altura 3 mm
(PT) copaSKY Pilar de titânio 0° altura 3 mm	(PL) copaSKY Łącznik tytanowy 0° wysokość 3 mm
(CS) copaSKY Titánový abutment 0° výška 3 mm	(SK) copaSKY Titánový abutment 0° výška 3 mm
(HU) copaSKY titánfelépítmény 0° magasság 3 mm	(RO) copaSKY bont din titan 0° înălțime 3 mm
(BG) copaSKY титанова надстройка 0° височина 3 mm	(EL) copaSKY Κολοβώματα τιτανίου 0° ύψους 3 mm
(SL) copaSKY Titanov abutment 0° višina 3 mm	(HR) copaSKY Nadogradnja od titana 0° visina 3 mm
(SV) copaSKY titanförankring 0° höjd 3 mm	(LT) copaSKY titano abatmentas, 0°, 3 mm aukštis
(ET) copaSKY titaanabutment 0° kõrgus 3 mm	(LV) copaSKY titāna balsts 0°, augstums 3 mm
(DA) copaSKY titanium-abutment 0° højde 3 mm	



MD



UDI

HIBC




+EBRMCOIPA 00000/557535053/16D20221110K

Qty 1 REF COPAPO00 LOT 535053 10.11.2022

Фото 11.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: - copaSKY абатмент титановый 0° высота 3 мм, в

- винт абатмента – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

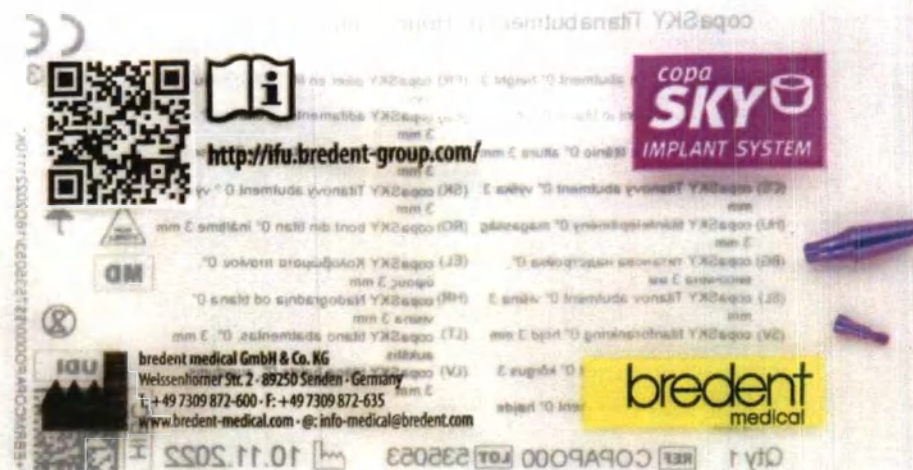

copaSKY Titaniumabutment 0° Höhe 3 mm

CE
0483

(EN) copaSKY titanium abutment 0° height 3 mm	(FR) copaSKY pilier en titane 0° hauteur 3 mm
(IT) copaSKY abutment in titanio 0° alt. 3 mm	(ES) copaSKY aditamento de titanio 0° altura 3 mm
(PT) copaSKY Pilar de titânio 0° altura 3 mm	(PL) copaSKY Łącznik tytanowy 0° wysokość 3 mm
(CS) copaSKY Titanový abutment 0° výška 3 mm	(SK) copaSKY Titánový abutment 0° výška 3 mm
(HU) copaSKY titánfeleépítmeny 0° magasság 3 mm	(RO) copaSKY bont din titan 0° înălțime 3 mm
(BG) copaSKY титанова надстройка 0°, височина 3 mm	(EL) copaSKY Κολοβώματα τιτανίου 0°, ύψους 3 mm
(SL) copaSKY Titanov abutment 0° višina 3 mm	(HR) copaSKY Nadogradnja od titana 0° višina 3 mm
(SV) copaSKY titanförankring 0° höjd 3 mm	(LT) copaSKY titano abatmentas. 0°, 3 mm aukštis
(ET) copaSKY titaanabutment 0° kõrgus 3 mm	(LV) copaSKY titāna balsts 0°, augstums 3 mm
(DA) copaSKY titanium-abutment 0° højde 3 mm	

Qty 1 REF COPAPO00 LOT 535053 10.11.2022

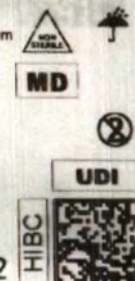



Фото 11.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: . copaSKY абатмент титановый 0° высота 3 мм. Вид в индивидуальной упаковке.



copaSKY Titanabutment 15° Höhe 3 mm

CE
0483

(EN) copaSKY titanium abutment 15° height 3 mm	(FR) copaSKY pilier en titane 15° hauteur 3 mm
(IT) copaSKY abutment in titanio 15° alt. 3 mm	(ES) copaSKY aditamento de titanio 15° altura 3 mm
(PT) copaSKY Pilar de titânio 15° altura 3 mm	(PL) copaSKY łącznik tytanowy 15° wysokość 3 mm
(CS) copaSKY Titanový abutment 15° výška 3 mm	(SK) copaSKY Titánový abutment 15° výška 3 mm
(HU) copaSKY titánfelepítőmény 15° magasság 3 mm	(RO) copaSKY bont din titan 15° înălțime 3 mm
(BG) copaSKY титанова надстройка 15° височина 3 mm	(EL) copaSKY Κολοβώματα τιτανίου 15° ύψους 3 mm
(SL) copaSKY Titanov abutment 15° višina 3 mm	(HR) copaSKY Nadogradnja od titana 15° visina 3 mm
(SV) copaSKY titanförankring 15° höjd 3 mm	(LT) copaSKY titano abatmentas 15°, 3 mm aukštis
(ET) copaSKY titaanabutment 15° kõrgus 3 mm	(LV) copaSKY titāna balsts 15°, augstums 3 mm
(DA) copaSKY titanium-abutment 15° højde 3 mm	

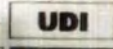


~EBRMICOPA PO150/\$\$7536303/16D2022/202R~

Qty 1 REF COPAPO15 LOT 536303 02.12.2022

Фото 12.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент титановый 15° высота 3 мм, в

- винт абатмента – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

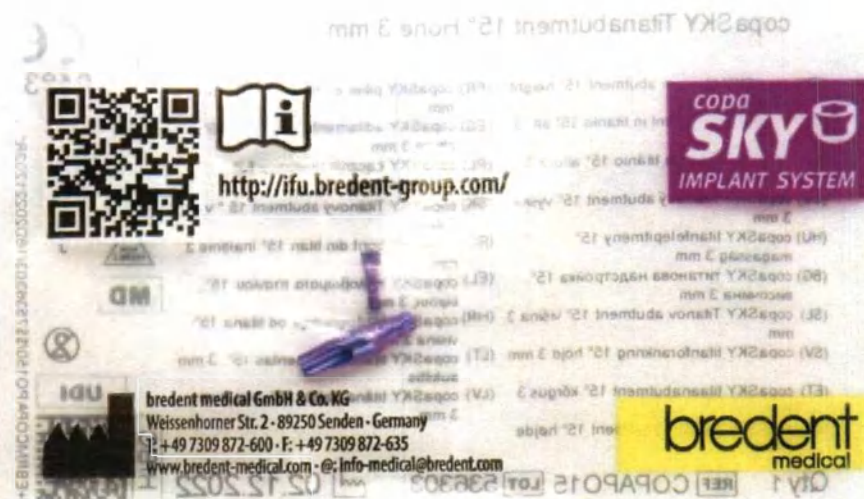

copaSKY Titanabutment 15° Höhe 3 mm

(EN) copaSKY titanium abutment 15° height 3 mm	(FR) copaSKY pilier en titane 15° hauteur 3 mm
(IT) copaSKY abutment in titanio 15° alt. 3 mm	(ES) copaSKY aditamento de titanio 15° altura 3 mm
(PT) copaSKY Pilar de titânio 15° altura 3 mm	(PL) copaSKY łącznik tytanowy 15° wysokość 3 mm
(CS) copaSKY Titanový abutment 15° výška 3 mm	(SK) copaSKY Titánový abutment 15° výška 3 mm
(HU) copaSKY titánfelepitmény 15° magasság 3 mm	(RO) copaSKY bont din titan 15° înălțime 3 mm
(BG) copaSKY титанова надстройка 15°, височина 3 mm	(EL) copaSKY Κολοβώματα τιτανίου 15°, ύψους 3 mm
(SL) copaSKY Titanov abutment 15° višina 3 mm	(HR) copaSKY Nadogradnja od titana 15° visina 3 mm
(SV) copaSKY titanförankring 15° höjd 3 mm	(LT) copaSKY titano abatmentas 15°, 3 mm aukštis
(ET) copaSKY titaanabutment 15° kõrgus 3 mm	(LV) copaSKY titāna baists 15°, augstums 3 mm
(DA) copaSKY titanium-abutment 15° højde 3 mm	

Qty 1 REF COPAPO15 LOT 536303 02.12.2022

CE
0483

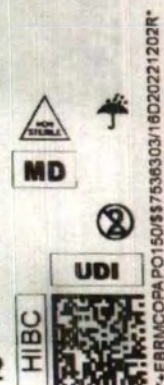


Фото 12.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент титановый 15° высота 3 мм. Вид в



copaSKY Titanabutment 15° R Höhe 3 mm

CE
0483

(EN) copaSKY titanium abutment 15° R height 3 mm	(FR) copaSKY pilier en titane 15° R hauteur 3 mm
(IT) copaSKY abutment in titanio 15° R alt 3 mm	(ES) copaSKY aditamento de titanio 15° R altura 3 mm
(PT) copaSKY Pilar de titânio 15° R altura 3 mm	(PL) copaSKY Łącznik tytanowy 15° R wysokość 3 mm
(CS) copaSKY Titanový abutment 15° R výška 3 mm	(SK) copaSKY Titánový abutment 15° R výška 3 mm
(HU) copaSKY titánfelépítmény, 15° R, magasság: 3 mm	(RO) copaSKY bont din titan 15° R înălțime 3 mm
(BG) copaSKY титанова надстройка 15° R, височина 3 mm	(EL) copaSKY Κολοβώματα τιτανίου 15° R, ύψους 3 mm
(SL) copaSKY Titanov abutment 15° R višina 3 mm	(HR) copaSKY Nadogradnja od titana 15° R visina 3 mm
(SV) copaSKY titanförankring 15° R höjd 3 mm	(LT) copaSKY titano abatmentas, 15° R, 3 mm aukštis
(ET) copaSKY titaanabutment 15° R kõrgus 3 mm	(LV) copaSKY titāna balsts 15° R, augstums 3 mm
(DA) copaSKY titanium-abutment 15° R højde 3 mm	



MD



UDI

HIBC



EBRMCOPA PO180/\$37533912/16D20221020T


Qty1 REF COPAPO16 LOT 533912 20.10.2022

Фото 13.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент титановый 15° R высота 3 мм, в

- винт абатмента – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

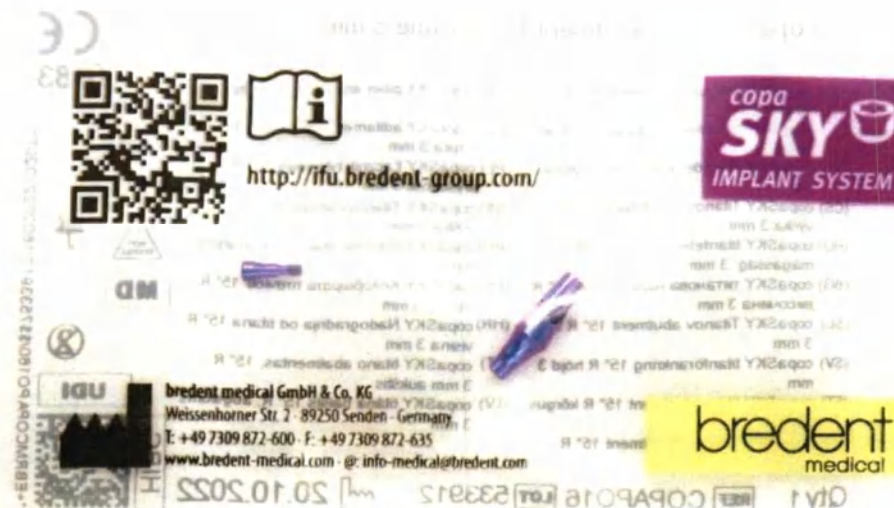

copaSKY Titanabutment 15° R Höhe 3 mm

CE
0483

- | | |
|--|--|
| (EN) copaSKY titanium abutment 15° R height 3 mm | (FR) copaSKY pilier en titane 15° R hauteur 3 mm |
| (IT) copaSKY abutment in titanio 15° R alt 3 mm | (ES) copaSKY aditamento de titanio 15° R altura 3 mm |
| (PT) copaSKY Pilar de titânio 15° R altura 3 mm | (PL) copaSKY łącznik tytanowy 15° R wysokość 3 mm |
| (CS) copaSKY Titánový abutment 15° R výška 3 mm | (SK) copaSKY Titánový abutment 15° R výška 3 mm |
| (HU) copaSKY titánfelepítmény, 15° R magasság: 3 mm | (RO) copaSKY bont din titan 15° R înălțime 3 mm |
| (BG) copaSKY титанова надстройка 15° R височина 3 mm | (EL) copaSKY Κολοσκάριον τιτανίου 15° R ύψους 3 mm |
| (SL) copaSKY Titanov abutment 15° R višina 3 mm | (HR) copaSKY Nadogradnja od titana 15° R visina 3 mm |
| (SV) copaSKY titänsöranring 15° R höjd 3 mm | (LT) copaSKY titano abatmentas, 15° R 3 mm aukštis |
| (ET) copaSKY titaanabutment 15° R kõrgus 3 mm | (LV) copaSKY titāna balsts 15° R, augstums 3 mm |
| (DA) copaSKY titanium-abutment 15° R højde 3 mm | |

Qty 1 REF COPAPO16 LOT 533912 20.10.2022

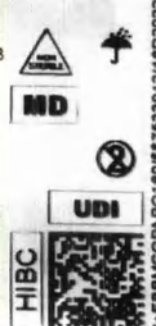


Фото 13.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент титановый 15° R высота 3 мм. Вид в индивидуальной упаковке.



copaSKY Titanabutment 25° Höhe 3 mm

CE
0483

(EN) copaSKY titanium abutment 25° height 3 mm	(FR) copaSKY pilier en titane 25° hauteur 3 mm
(IT) copaSKY abutment in titanio 25° alt. 3 mm	(ES) copaSKY aditamento de titanio 25° altura 3 mm
(PT) copaSKY Pilar de titânio 25° altura 3 mm	(PL) copaSKY łącznik tytanowy 25° wysokość 3 mm
(CS) copaSKY Titanový abutment 25° výška 3 mm	(SK) copaSKY Titánový abutment 25° výška 3 mm
(HU) copaSKY titánfelépítmény 25° magasság 3 mm	(RO) copaSKY bont din titan 25° înălțime 3 mm
(BG) copaSKY титанова надстройка 25° височина 3 mm	(EL) copaSKY Κολοβώματα τιτανίου 25° ύψους 3 mm
(SL) copaSKY Titanov abutment 25° višina 3 mm	(HR) copaSKY Nadogradnja od titana 25° visina 3 mm
(SV) copaSKY titanförankring 25° höjd 3 mm	(LT) copaSKY titano abalmentas, 25°, 3 mm aukštis
(ET) copaSKY titaanabutment 25° kõrgus 3 mm	(LV) copaSKY titāna balsts 25°, augstums 3 mm
(DA) copaSKY titanium-abutment 25° højde 3 mm	



MD



UDI

HIBC



EBRMCOPA PO250/\$7533249/18D202209286

Qty 1 REF COPAPO25 LOT 533249 29.09.2022

Фото 14.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент титановый 25° высота 3 мм, в

- винт абатмента – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.


Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

copaSKY Titanabutment 25° Höhe 3 mm

CE
0483

(EN) copaSKY titanium abutment 25° height 3 mm
(IT) copaSKY abutment in titanio 25° alt 3 mm
(PT) copaSKY Pilar de titânio 25° altura 3 mm
(CS) copaSKY Titanový abutment 25° výška 3 mm
(HU) copaSKY titánfelepitmény 25° magasság 3 mm
(BG) copaSKY титанова надстройка 25° височина 3 mm
(SL) copaSKY Titanov abutment 25° višina 3 mm
(SV) copaSKY titanförankring 25° höjd 3 mm
(ET) copaSKY titaanabutment 25° kõrgus 3 mm
(DA) copaSKY titanium-abutment 25° højde 3 mm
(FR) copaSKY pilier en titane 25° hauteur 3 mm
(ES) copaSKY aditamento de titanio 25° altura 3 mm
(PL) copaSKY łącznik tytanowy 25° wysokość 3 mm
(SK) copaSKY Titanový abutment 25° výška 3 mm
(RO) copaSKY bont din titan 25° înălțime 3 mm
(EL) copaSKY Κολοβώματα τιτανίου 25° ύψους 3 mm
(HR) copaSKY Nadogradnja od titana 25° visina 3 mm
(LT) copaSKY titano abatmentas, 25° 3 mm aukštis
(LV) copaSKY titāna balsts 25° augstums 3 mm

Qty 1 REF COPAPO25 LOT 533249 29.09.2022

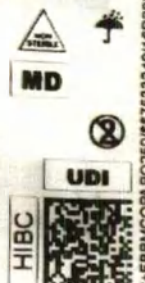

EBRMCPA P02501\$7533249/160202209296*

copaSKY IMPLANT SYSTEM

<http://ifu.bredent-group.com/>

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhofer Str. 2 · 89250 Senden · Germany
T: +49 7309 872-600 · F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com · @ info-medical@bredent.com

bredent medical

Фото 14.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент титановый 25° высота 3 мм.



copa
SKY

copaSKY Titanabutment 25° R
Höhe 3 mm

CE
0483

(EN) copaSKY titanium abutment
25° R height 3 mm

(FR) copaSKY pilier en titane
25° R hauteur 3 mm

(IT) copaSKY abutment in titanio
25° R alt. 3 mm

(ES) copaSKY aditamento de titar io
25° R altura 3 mm

Qty 1

LOT 527097

REF COPAPO26



*EBRM COPAPO 260X\$7527097B

bredent
medical

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhofer Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: +49 7309 872-600 | F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com | @ info-medical@bredent.com

Фото 15.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент титановый 25° R высота 3 мм, в

- винт абатмента – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

(DE) Gebrauchsanweisung
SKY Abutments

WOMATEX-2019-0018



CE
0483

Bitte diese Gebrauchsanweisung vor dem Produkteinsatz ausführlich lesen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, lehnt der Hersteller jede Haftung ab.

1. Produktbeschreibung

Die SKY/copaSKY Abutments dienen zur prothetischen Versorgung von Kieferknochen mit Implantaten der Marke narrow SKY und copaSKY.

**copa
SKY**

**copaSKY Titanabutment 25° R
Höhe 3 mm**

CE
0483

(EN) copaSKY titanium abutment
25° R height 3 mm

(FR) copaSKY pilier en titane
25° R hauteur 3 mm

(IT) copaSKY abutment in titanio
25° R alt. 3 mm

(ES) copaSKY aditamento de titanio
25° R altura 3 mm

Qty 1

LOT 527097

REF COPAPO26


**bredent
medical**

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhofer Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: +49 7309 872-600 | F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com | info-medical@bredent.com



Die narrowSKY Implantate sind nur mit den SKY-esthetisch aufbereiteten Kieferknochen zu verwenden. Um eine Verwechslung auszuschließen, sind die Abutments mit narrow platform rotgold zu verwenden.

Фото 15.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент титановый 25° R высота 3 мм.

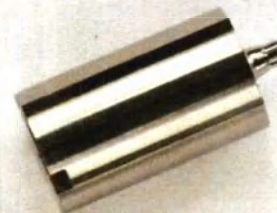

copa
SKY  **copaSKY prefab Titan**

(EN) copaSKY prefab titanium (FR) copaSKY prefab en titane
(IT) copaSKY prefab in titanio (ES) copaSKY prefab titanio

Qty 1 **LOT** 538302 **REF** COPAPFST

breident
medical 

breident medical GmbH & Co. KG
Weissenhorner Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: +49 7309 872-600 | F: +49 7309 872-635
www.breident-medical.com | @ info-medical@breident.com

CE
0483





*EBR/COPAPFST0483/538302%

Фото 16.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент обрабатываемый титановый, в

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

(DE) Gebrauchsanweisung

009886EX-20190312



C
0

SKY prefab Titan
copaSKY prefab Titan
mini²SKY prefab Titan

Bitte diese Gebrauchsanweisung vor dem Produkteinsatz ausführlich lesen!

Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Gebrauchsanweisung entstehen, ist der Hersteller nicht haftbar.

1. Produktbeschreibung:
Die SKY prefab Titan
Implantate sind aus
Titan gefertigt.

2. Indikation:
Mit dem SKY prefab Titan

3. Kontraindikation:
Das Produkt ist nicht für
Kieferprothetik, End-
prothetik, starke Runder-
mandelknoschen.
Bei Verdacht auf Nicht-
heilung des Kieferknochens.

copa
SKY  **copaSKY prefab Titan**

(EN) copaSKY prefab titanium

(FR) copaSKY prefab en titane

(IT) copaSKY prefab in titanio

(ES) copaSKY prefab titanio


Qty 1 **LOT** 538302

REF COPAPFST

bredent
medical

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhofer Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: +49 7309 872-600 | F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com | info-medical@bredent.com

CE
0483

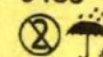

EBRACOPAPFST0557530796



ACHTUNG

Фото 16.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент обрабатываемый титановый.



copaSKY uni.cone Abutment Höhe 1 mm

CE
0483

(EN) copaSKY uni.cone abutment, height 1 mm	(FR) Pilier copaSKY uni.cone, hauteur 1 mm
(IT) Abutment copaSKY uni.cone alt. 1 mm	(ES) copaSKY uni.cone Aditamento altura 1 mm
(PT) Pilar copaSKY uni.cone, altura 1 mm	(PL) Zaczep copaSKY uni.cone wysokość 1 mm
(CS) Abutment copaSKY uni.cone výška 1 mm	(SK) copaSKY uni.cone abutment, výška 1 mm
(HU) copaSKY uni.cone csomk, 1 mm-es magasság	(RO) Bont copaSKY uni.cone înălțime 1 mm
(BG) Надстройка copaSKY uni.cone, височина 1 mm	(EL) Κολοβωμα copaSKY uni.cone, ύψους 1 mm
(SL) Abutment copaSKY uni.cone, višina 1 mm	(HR) copaSKY uni.cone nadogradnja, visina 1 mm
(SV) copaSKY uni.cone förankring höjd 1 mm	(LT) „copaSKY uni.cone“ abatmentas, aukštis 1 mm
(ET) copaSKY uni.cone abutment, kõrgus 1 mm	(LV) copaSKY uni.cone balsts, augstums 1 mm
(DA) copaSKY uni.cone Abutment højde 1 mm	

Qty 1 REF COPAUC01 LOT 536295 01.12.2022



MD



UDI

HIBC



EBRM/COPA UC010/\$536295/16D202212010

- абатмент – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

copaSKY uni.cone Abutment Höhe 1 mm




<http://ifu.bredent-group.com/>

copa SKY
IMPLANT SYSTEM

bredent
medical

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany
T: +49 7309 872-600 · F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com · @: info-medical@bredent.com

MD

UDI

REF COPAUC01 LOT 536295 01.12.2022

copaSKY uni.cone Abutment Höhe 1 mm

- | | |
|---|--|
| (EN) copaSKY uni.cone abutment, height 1 mm | (FR) Pilier copaSKY uni.cone, hauteur 1 mm |
| (IT) Abutment copaSKY uni.cone alt. 1 mm | (ES) copaSKY uni.cone Aditamento altura 1 mm |
| (PT) Pilar copaSKY uni.cone, altura 1 mm | (PL) Zaczep copaSKY uni.cone wysokość 1 mm |
| (CS) Abutment copaSKY uni.cone výška 1 mm | (SK) copaSKY uni.cone abutment, výška 1 mm |
| (HU) copaSKY uni.cone csomk, 1 mm-es magasság | (RO) Bont copaSKY uni.cone înălțime 1 mm |
| (BG) Надстройка copaSKY uni.cone, височина 1 mm | (EL) Κολοβωμα copaSKY uni.cone, ύψους 1 mm |
| (SL) Abutment copaSKY uni.cone, višina 1 mm | (HR) copaSKY uni.cone nadogradnja, visina 1 mm |
| (SV) copaSKY uni.cone förankring höjd 1 mm | (LT) „copaSKY uni.cone“ abatmentas, aukštis 1 mm |
| (ET) copaSKY uni.cone abutment, kõrgus 1 mm | (LV) copaSKY uni.cone balsts, augstums 1 mm |
| (DA) copaSKY uni.cone Abutment højde 1 mm | |

Qty 1 REF COPAUC01 LOT 536295 01.12.2022

CE
0483



EBRMCOPAUC010155753629518D202212010



copaSKY uni.cone Abutment Höhe 2 mm

CE
0483

(EN) copaSKY uni.cone abutment, height 2 mm	(FR) Pilier copaSKY uni.cone, hauteur 2 mm
(IT) Abutment copaSKY uni.cone alt 2 mm	(ES) copaSKY uni.cone Aditamento altura 2 mm
(PT) Pilar copaSKY uni.cone, altura 2 mm	(PL) Zaczep copaSKY uni.cone wysokość 2 mm
(CS) Abutment copaSKY uni.cone výška 2 mm	(SK) copaSKY uni.cone abutment, výška 2 mm
(HU) copaSKY uni.cone csornk, 2 mm-es magasság	(RO) Bont copaSKY uni.cone înălțime 2 mm
(BG) Надстройка copaSKY uni.cone височина 2 mm	(EL) Κολόβωμα copaSKY uni.cone, ύψους 2 mm
(SL) Abutment copaSKY uni.cone, višina 2 mm	(HR) copaSKY uni.cone nadogradnja, visina 2 mm
(SV) copaSKY uni.cone förankning höjd 2 mm	(LT) „copaSKY uni.cone“ abatmentas, aukštis 2 mm
(ET) copaSKY uni.cone abutment, kõrgus 2 mm	(LV) copaSKY uni.cone balsts, augstums 2 mm
(DA) copaSKY uni.cone Abutment højde 2 mm	



UDI

HIBC



*EBRMCOAUC020/\$57534497/16D20221026W

Qty 1 REF COPAUC02 LOT 534497 26.10.2022

- абатмент – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

copaSKY uni.cone Abutment Höhe 2 mm



<http://ifu.bredent-group.com/>





bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhofer Str. 2 · 89250 Senden · Germany
T: +49 7309 872-600 · F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com · @: info-medical@bredent.com

REF COPAUC02 LOT 534497 26.10.2022

copaSKY uni.cone Abutment Höhe 2 mm

(EN) copaSKY uni.cone abutment, height 2 mm	(FR) Plier copaSKY uni.cone, hauteur 2 mm
(IT) Abutment copaSKY uni.cone alt. 2 mm	(ES) copaSKY uni.cone Aditamento altura 2 mm
(PT) Pilar copaSKY uni.cone, altura 2 mm	(PL) Zaczep copaSKY uni.cone wysokość 2 mm
(CS) Abutment copaSKY uni.cone výška 2 mm	(SK) copaSKY uni.cone abutment, výška 2 mm
(HU) copaSKY uni.cone csomék, 2 mm-es magasság	(RO) Bont copaSKY uni.cone înălțime 2 mm
(BG) Надреповка copaSKY uni.cone височина 2 mm	(EL) Κολόβωμα copaSKY uni.cone, ύψους 2 mm
(SL) Abutment copaSKY uni.cone, višina 2 mm	(HR) copaSKY uni.cone nadogradnja, visina 2 mm
(SV) copaSKY uni.cone förankning höjd 2 mm	(LT) „copaSKY uni.cone“ abatmentas, aukštis 2 mm
(ET) copaSKY uni.cone abutment, kõrgus 2 mm	(LV) copaSKY uni.cone balsts, augstums 2 mm
(DA) copaSKY uni.cone Abutment højde 2 mm	

Qty 1 REF COPAUC02 LOT 534497 26.10.2022







*EBRMCOPALUC020557534497/16020221026W

Фото 18.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY uni.cone абатмент высота 2 мм.



copaSKY uni.cone Abutment Höhe 3 mm

CE
0483

(EN) copaSKY uni.cone abutment, height 3 mm	(FR) Pilier copaSKY uni.cone hauteur 3 mm
(IT) Abutment copaSKY uni.cone alt. 3 mm	(ES) copaSKY uni.cone Aditamento altura 3 mm
(PT) Pilar copaSKY uni.cone, altura 3 mm	(PL) Zaczep copaSKY uni.cone wysokość 3 mm
(CS) Abutment copaSKY uni.cone výška 3 mm	(SK) copaSKY uni.cone abutment, výška 3 mm
(HU) copaSKY uni.cone csanak, 3 mm-es magasság	(RO) Bont copaSKY uni.cone înălțime 3 mm
(BG) Надстройка copaSKY uni.cone височина 3 mm	(EL) Κολόβωμα copaSKY uni.cone, ύψους 3 mm
(SL) Abutment copaSKY uni.cone višina 3 mm	(HR) copaSKY uni.cone nadogradnja visina 3 mm
(SV) copaSKY uni.cone förankring höjd 3 mm	(LT) „copaSKY uni.cone“ abatmentas, aukštis 3 mm
(ET) copaSKY uni.cone abutment, kõrgus 3 mm	(LV) copaSKY uni.cone balsts, augstums 3 mm
(DA) copaSKY uni.cone Abutment højde 3 mm	



UDI

HIBC



EBRMCOPAUC030/\$\$7532961/16D20220915X

Qty 1 REF COPAUC03 LOT 532961 15.09.2022

Фото 19.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY uni.cone абатмент высота 3 мм, в составе:



copaSKY uni.cone Abutment Höhe 3 mm

CE
0483

(EN) copaSKY uni.cone abutment, height 3 mm	(FR) Pilier copaSKY uni.cone hauteur 3 mm
(IT) Abutment copaSKY uni.cone alt 3 mm	(ES) copaSKY uni.cone Aditamento altura 3 mm
(PT) Pilar copaSKY uni.cone, altura 3 mm	(PL) Zaczep copaSKY uni.cone wysokość 3 mm
(CS) Abutment copaSKY uni.cone výška 3 mm	(SK) copaSKY uni.cone abutment, výška 3 mm
(HU) copaSKY uni.cone csomk, 3 mm-es magasság	(RO) Bont copaSKY uni.cone înălțime 3 mm
(BG) Надстройка copaSKY uni.cone височина 3 mm	(EL) Κολόβωμα copaSKY uni.cone ύψους 3 mm
(SL) Abutment copaSKY uni.cone višina 3 mm	(HR) copaSKY uni.cone nadogradnja visina 3 mm
(SV) copaSKY uni.cone förankring höjd 3 mm	(LT) „copaSKY uni.cone“ abatmentas, aukštis 3 mm
(ET) copaSKY uni.cone abutment, kõrgus 3 mm	(LV) copaSKY uni.cone balsts, augstums 3 mm
(DA) copaSKY uni.cone Abutment højde 3 mm	

Qty 1 REF COPAUC03 LOT 532961 15.09.2022

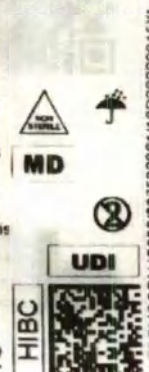


Фото 19.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY uni.cone абатмент высота 3 мм. Вид в



copaSKY uni.cone Abutment 25° Höhe 1,5mm

CE
0483

(EN) copaSKY uni.cone abutment 25° height 1.5 mm	(FR) copaSKY pilier uni.cone 25° hauteur 1.5 mm
(IT) copaSKY uni.cone abutment 25° alt. 1.5 mm	(ES) copaSKY uni.cone aditamento 25° altura 1.5 mm
(PT) Pilar copaSKY uni.cone 25° altura 1.5 mm	(PL) Zaczep copaSKY uni.cone 25° wysokość 1.5 mm
(CS) Abutment copaSKY uni.cone 25° výška 1.5 mm	(SK) copaSKY uni.cone abutment 25° výška 1.5 mm
(HU) copaSKY uni.cone csomk. 25° 1.5 mm-es magasság	(RO) Bont copaSKY uni.cone 25° înălțime 1.5 mm
(BG) Надстройка copaSKY uni.cone 25° височина 1.5 mm	(EL) Κολοβωμα copaSKY uni.cone 25° ύψους 1.5 mm
(SL) Abutment copaSKY uni.cone 25° višina 1.5 mm	(HR) copaSKY uni.cone nadogradnja 25° visina 1.5 mm
(SV) copaSKY uni.cone förankring 25° höjd 1.5 mm	(LT) copaSKY uni.cone abatmentas 25° aukštis 1.5 mm
(ET) copaSKY uni.cone abutment 25° kõrgus 1.5 mm	(LV) copaSKY uni.cone balsts 25° augstums 1.5 mm
(DA) copaSKY uni.cone Abutment 25° højde 1.5 mm	



MD



UDI

HIBC




EBRMCOPUC2520557533252/16D20206295

Qty 1 REF COPUC252 LOT 533252 29.09.2022

Фото 20.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY uni.cone абатмент 25° высота 1.5 мм, в составе:

- ключ параллельности – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

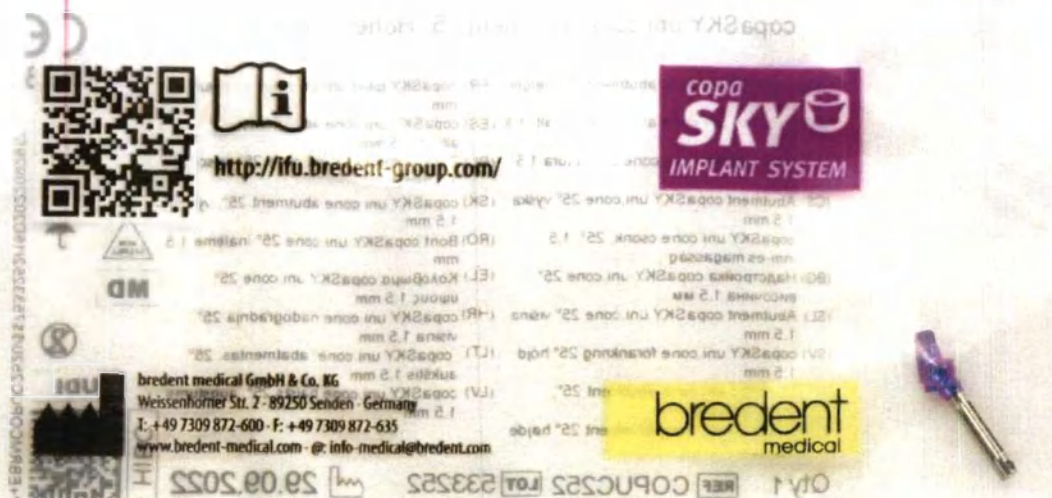

copaSKY uni.cone Abutment 25° Höhe 1.5mm

CE 0483

(EN) copaSKY uni.cone abutment 25° height 1.5 mm	(FR) copaSKY pilier uni.cone 25° hauteur 1.5 mm
(IT) copaSKY uni.cone abutment 25° alt 1.5 mm	(ES) copaSKY uni.cone aditamento 25° altura 1.5 mm
(PT) Pilar copaSKY uni.cone 25° altura 1.5 mm	(PL) Zaczep copaSKY uni.cone 25° wysokość 1.5 mm
(CS) Abutment copaSKY uni.cone 25° výška 1.5 mm	(SK) copaSKY uni.cone abutment 25° výška 1.5 mm
(HU) copaSKY uni.cone csomk. 25°, 1.5 mm-es magasság	(RO) Bont copaSKY uni.cone 25° înălțime 1.5 mm
(BG) Надстройка copaSKY uni.cone 25°, височина 1.5 мм	(EL) Κολοβωμα copaSKY uni.cone 25°, ύψους 1.5 mm
(SL) Abutment copaSKY uni.cone 25° višina 1.5 mm	(HR) copaSKY uni.cone nadogradnja 25° visina 1.5 mm
(SV) copaSKY uni.cone förankring 25° höjd 1.5 mm	(LT) copaSKY uni.cone abatmentas 25° aukštis 1.5 mm
(ET) copaSKY uni.cone abutment 25°, kõrgus 1.5 mm	(LV) copaSKY uni.cone balsts 25°, augstums 1.5 mm
(DA) copaSKY uni.cone Abutment 25° højde 1.5 mm	

Qty 1 REF COPUC252 LOT 533252 29.09.2022

UDI

HBC

MD

REF COPUC252 LOT 533252

29.09.2022

UDI

REF COPUC252 LOT 533252

29.09.2022

Фото 20.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY uni.cone абатмент 25° высота 1.5 мм.



copaSKY uni.cone Abutment 25° Höhe 2,5mm

CE
0483

(EN) copaSKY uni.cone abutment 25° height 2.5 mm	(FR) copaSKY pilier uni.cone 25° hauteur 2.5 mm
(IT) copaSKY uni.cone abutment 25° alt. 2.5 mm	(ES) copaSKY uni.cone aditamento 25° altura 2.5 mm
(PT) Pilar copaSKY uni.cone 25° altura 2.5 mm	(PL) Zaczep copaSKY uni.cone 25° wysokość 2.5 mm
(CS) Abutment copaSKY uni.cone 25° výška 2.5 mm	(SK) copaSKY uni.cone abutment 25° výška 2.5 mm
(HU) copaSKY uni.cone csomk. 25°, 2.5 mm-es magasság	(RO) Bont copaSKY uni.cone 25° înălțime 2.5 mm
(BG) Надстройка copaSKY uni.cone 25°, височина 2.5 mm	(EL) Κολόβωμα copaSKY uni.cone 25°, ύψους 2.5 mm
(SL) Abutment copaSKY uni.cone 25° visina 2.5 mm	(HR) copaSKY uni.cone nadogradnja 25° visina 2.5 mm
(SV) copaSKY uni.cone förankring 25° höjd 2.5 mm	(LT) copaSKY uni.cone abatmentas, 25° aukštis 2.5 mm
(ET) copaSKY uni.cone abutment 25°, kõrgus 2.5 mm	(LV) copaSKY uni.cone balsts 25°, augstums 2.5 mm
(DA) copaSKY uni.cone Abutment 25° højde 2.5 mm	



MD



UDI

HIBC



COPUC2530/\$7533253/16D20220929U

Qty 1 REF COPUC253 LOT 533253 29.09.2022

Фото 21.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY uni.cone абатмент 25° высота 2.5 мм , в

- винт абатмента - 1 шт.;
- ключ параллельности – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.




copaSKY uni.cone Abutment 25° Höhe 2,5mm

(EN) copaSKY uni cone abutment 25° height 2.5 mm	(FR) copaSKY pilier uni cone 25° hauteur 2.5 mm
(IT) copaSKY uni cone abutment 25° alt. 2.5 mm	(ES) copaSKY uni cone edificación 25° altura 2.5 mm
(PT) Pilar copaSKY uni cone 25° altura 2.5 mm	(PL) Zaczep copaSKY uni cone 25° wysokość 2.5 mm
(CS) Abutment copaSKY uni cone 25° výška 2.5 mm	(SK) copaSKY uni cone abutment 25° výška 2.5 mm
(HU) copaSKY uni cone csomék 25° 2.5 mm-es magasság	(RO) Bont copaSKY uni cone 25° înălțime 2.5 mm
(BG) Надстройка copaSKY uni cone 25° височина 2.5 mm	(EL) Κορυφή copaSKY uni cone 25° ύψους 2.5 mm
(SL) Abutment copaSKY uni cone 25° visina 2.5 mm	(HR) copaSKY uni cone nadogradnja 25° visina 2.5 mm
(SV) copaSKY uni cone förankring 25° höjd 2.5 mm	(LT) copaSKY uni cone abatmentas 25° aukštis 2.5 mm
(ET) copaSKY uni cone abutment 25° kõrgus 2.5 mm	(LV) copaSKY uni cone balsts 25° augstums 2.5 mm
(DA) copaSKY uni cone Abutment 25° højde 2.5 mm	

Qty 1 REF COPUC253 LOT 533253 29.09.2022

CE 0483

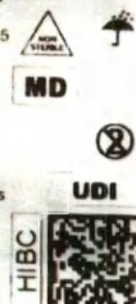

EBRMCOUC2530/S1/533253/18C20220929U

Фото 21.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY uni.cone абатмент 25° высота 2.5 мм.



copaSKY uni.cone Abutment 35° Höhe 1,5 mm

CE
0483

(EN) copaSKY uni.cone abutment 35° height 1,5 mm	(FR) copaSKY uni.cone pilier 35° hauteur 1,5 mm
(IT) copaSKY uni.cone abutment 35° alt. 1,5 mm	(ES) copaSKY uni.cone aditamento 35° altura 1,5 mm
(PT) Pilar copaSKY uni.cone 35°, altura 1,5 mm	(PL) Zaczep copaSKY uni.cone 35° wysokość 1,5 mm
(CS) Abutment copaSKY uni.cone 35° výška 1,5 mm	(SK) copaSKY uni.cone abutment 35°, výška 1,5 mm
(HU) copaSKY uni.cone csomk, 35°, 1,5 mm-es magasság	(RO) Bont copaSKY uni.cone 35° înălțime 1,5 mm
(BG) Надстройка copaSKY uni.cone 35° височина 1,5 mm	(EL) Κολόβωμα copaSKY uni.cone 35° ύψους 1,5 mm
(SL) Abutment copaSKY uni.cone 35° višina 1,5 mm	(HR) copaSKY uni.cone nadogradnja 35° visina 1,5 mm
(SV) copaSKY uni.cone förankring 35° höjd 1,5 mm	(LT) „copaSKY uni.cone“ abatmentas, 35° aukštis 1,5 mm
(ET) copaSKY uni.cone abutment 35°, kõrgus 1,5 mm	(LV) copaSKY uni.cone balsts 35°, augstums 1,5 mm
(DA) copaSKY uni.cone Abutment 35° højde 1,5 mm	



MD



UDI

HIBC





EBRM COPUC3520/\$\$7533254/16D20220929V

Qty 1 REF COPUC352 LOT 533254 29.09.2022

- ключ параллельности – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

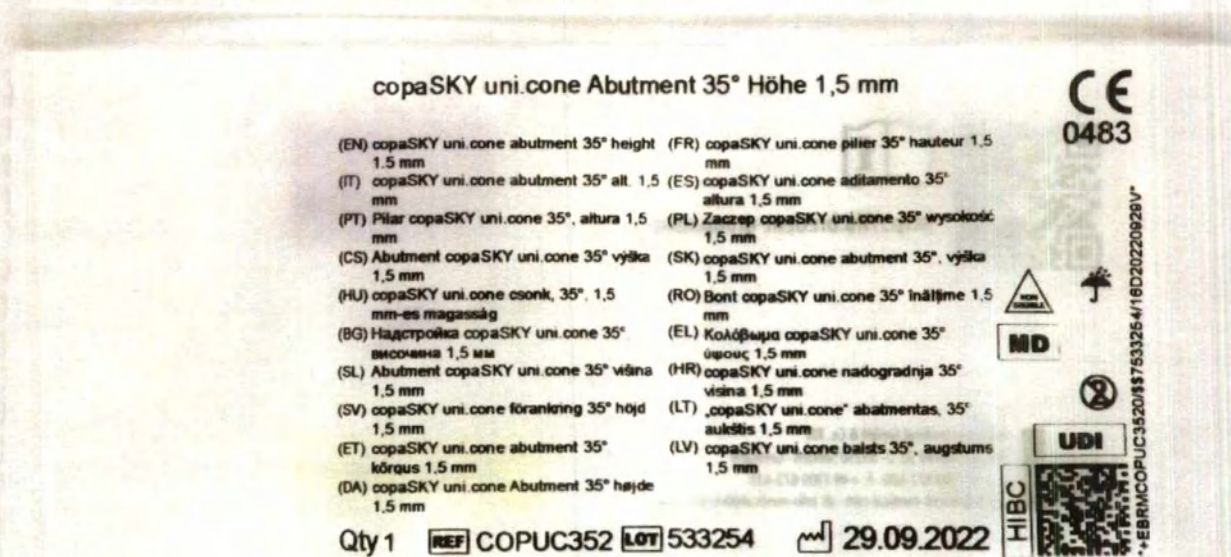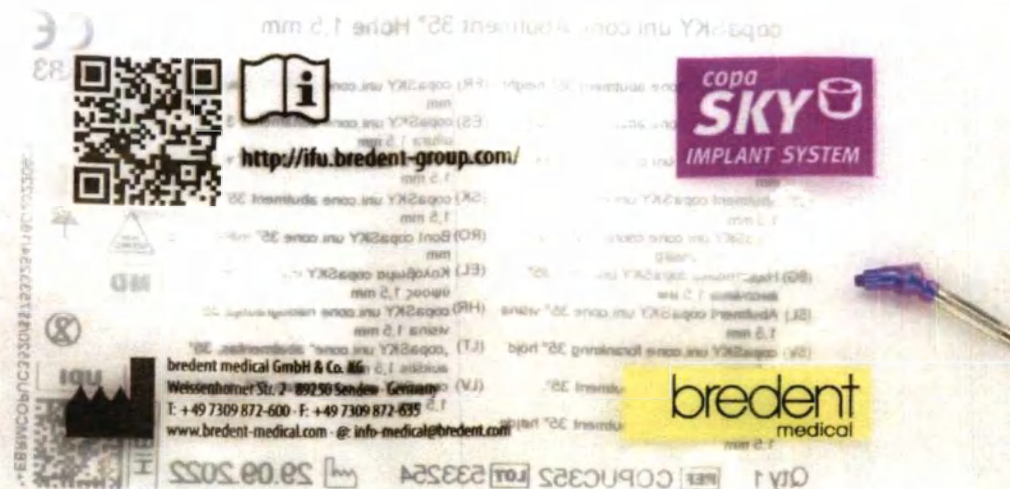




copaSKY uni.cone Abutment 35° Höhe 2,5 mm

CE
0483

(EN) copaSKY uni.cone abutment 35° height 2,5 mm	(FR) copaSKY uni.cone pilier 35° hauteur 2,5 mm
(IT) copaSKY uni.cone abutment 35° alt. 2,5 mm	(ES) copaSKY uni.cone aditamento 35° altura 2,5 mm
(PT) Pilar copaSKY uni.cone 35°, altura 2,5 mm	(PL) Zaczep copaSKY uni.cone 35° wysokość 2,5 mm
(CS) Abutment copaSKY uni.cone 35° výška 2,5 mm	(SK) copaSKY uni.cone abutment 35°, výška 2,5 mm
(HU) copaSKY uni.cone csomk, 35°, 2,5 mm-es magasság	(RO) Bont copaSKY uni.cone 35° înălțime 2,5 mm
(BG) Надстройка copaSKY uni.cone 35°, височина 2,5 mm	(EL) Κολοβωμα copaSKY uni.cone 35°, ύψους 2,5 mm
(SL) Abutment copaSKY uni.cone 35° višina 2,5 mm	(HR) copaSKY uni.cone nadogradnja 35°, visina 2,5 mm
(SV) copaSKY uni.cone förankring 35° höjd 2,5 mm	(LT) „copaSKY uni.cone“ abatmentas, 35°, aukštis 2,5 mm
(ET) copaSKY uni.cone abutment 35°, kõrgus 2,5 mm	(LV) copaSKY uni.cone balsts 35°, augstums 2,5 mm
(DA) copaSKY uni.cone Abutment 35° højde 2,5 mm	

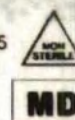

UDI

HIBC



+EBRMICOPUC3530/\$\$7536612/16D20221209P

Qty 1 REF COPUC353 LOT 536612 09.12.2022

- ключ параллельности – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.



copaSKY uni.cone Abutment 35° Höhe 2,5 mm

CE
0483

(EN) copaSKY uni.cone abutment 35° height 2,5 mm	(FR) copaSKY uni.cone pilier 35° hauteur 2,5 mm
(IT) copaSKY uni.cone abutment 35° alt. 2,5 mm	(ES) copaSKY uni.cone aditamento 35° altura 2,5 mm
(PT) Pilar copaSKY uni.cone 35°, altura 2,5 mm	(PL) Zaczep copaSKY uni.cone 35° wysokość 2,5 mm
(CS) Abutment copaSKY uni.cone 35° výška 2,5 mm	(SK) copaSKY uni.cone abutment 35°, výška 2,5 mm
(HU) copaSKY uni.cone csomk, 35°, 2,5 mm-es magasság	(RO) Bont copaSKY uni.cone 35° înălțime 2,5 mm
(BG) Надстройка copaSKY uni.cone 35°, височина 2,5 mm	(EL) Κολοβωμα copaSKY uni.cone 35°, ύψους 2,5 mm
(SL) Abutment copaSKY uni.cone 35° višina 2,5 mm	(HR) copaSKY uni.cone nadogradnja 35°, visina 2,5 mm
(SV) copaSKY uni.cone förankring 35° höjd 2,5 mm	(LT) „copaSKY uni.cone“ abatmentas, 35°, aukštis 2,5 mm
(ET) copaSKY uni.cone abutment 35°, kõrgus 2,5 mm	(LV) copaSKY uni.cone balsts 35°, augstums 2,5 mm
(DA) copaSKY uni.cone Abutment 35° højde 2,5 mm	

Qty 1 REF COPUC353 LOT 536612 09.12.2022



UDI

HIBC



EBRMCOPUC3530/\$37536612/18D20221209P

Фото 23.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY uni.cone абатмент 35° высота 2.5 мм. Вид в



BioHPP copaSKY elegance Abutment 0° Höhe 4 mm

- | | |
|--|---|
| (EN) BioHPP copaSKY elegance abutment
0° height 4 mm | (FR) BioHPP copaSKY elegance pilier 0°
hauteur 4 mm |
| (IT) BioHPP copaSKY elegance abutment
0° alt. 4 mm | (ES) BioHPP copaSKY elegance aditamento
0° altura 4 mm |
| (PT) Pilar BioHPP copaSKY elegance 0°
altura 4 mm | (PL) Łącznik BioHPP copaSKY elegance 0°
wysokość 4 mm |
| (CS) Abutment BioHPP copaSKY elegance
0° výška 4 mm | (SK) Abutment 0° BioHPP copaSKY
elegance výška 4 mm |
| (HU) BioHPP copaSKY elegance csomk 0°
magasság: 4 mm | (RO) Bont BioHPP copaSKY elegance 0°
înălțime 4 mm |
| (BG) Надстройка BioHPP copaSKY
elegance 0°, височина 4 mm | (EL) Κολόβωμα 0° BioHPP copaSKY
elegance, ύψους 4 mm |
| (SL) Abutment BioHPP copaSKY elegance
0° višina 4 mm | (HR) BioHPP copaSKY elegance
nadogradnja 0°, visina 4 mm |
| (SV) BioHPP copaSKY elegance förankring
0° höjd 4 mm | (LT) BioHPP copaSKY elegance 0°
abatmentas, aukštis 4 mm |
| (ET) BioHPP copaSKY elegance abutment
0°, kõrgus 4 mm | (LV) BioHPP copaSKY elegance balsts 0°
augstums 4 mm |
| (DA) BioHPP copaSKY elegance Abutment
0° højde 4 mm | |

CE
0483



UDI

HIBC




+EBRMCPA EM000/\$7527025/16020220503C

Qty1 REF COPAEM00 LOT 527025 03.05.2022

Фото 24.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY elegance абатмент BioHPP 0° высота 4 мм, в

- винт абатмента – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

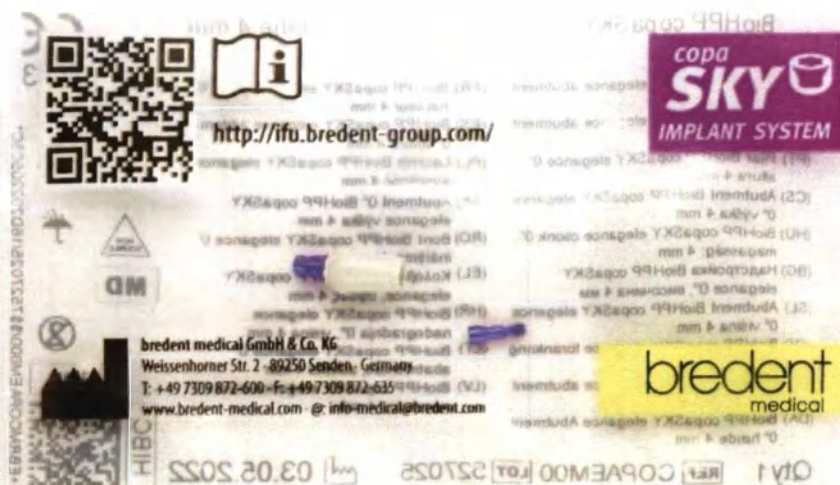

BioHPP copaSKY elegance Abutment 0° Höhe 4 mm

(EN) BioHPP copaSKY elegance abutment 0° height 4 mm	(FR) BioHPP copaSKY elegance pilier 0° hauteur 4 mm
(IT) BioHPP copaSKY elegance abutment 0° alt. 4 mm	(ES) BioHPP copaSKY elegance aditamento 0° altura 4 mm
(PT) Pilar BioHPP copaSKY elegance 0° altura 4 mm	(PL) łącznik BioHPP copaSKY elegance 0° wysokość 4 mm
(CS) Abutment BioHPP copaSKY elegance 0° výška 4 mm	(SK) Abutment 0° BioHPP copaSKY elegance výška 4 mm
(HU) BioHPP copaSKY elegance csomk 0° magasság 4 mm	(RO) Bont BioHPP copaSKY elegance 0° înălțime 4 mm
(BG) Надстройка BioHPP copaSKY elegance 0°, височина 4 mm	(EL) Κολόβωμα 0° BioHPP copaSKY elegance, ύψους 4 mm
(SL) Abutment BioHPP copaSKY elegance 0° višina 4 mm	(HR) BioHPP copaSKY elegance nadogradnja 0°, visina 4 mm
(SV) BioHPP copaSKY elegance förankning 0° höjd 4 mm	(LT) BioHPP copaSKY elegance 0° abatmentas, aukštis 4 mm
(ET) BioHPP copaSKY elegance abutment 0°, kõrgus 4 mm	(LV) BioHPP copaSKY elegance balsts 0° augstums 4 mm
(DA) BioHPP copaSKY elegance Abutment 0° højde 4 mm	

Qty 1 REF COPAEM00 LOT 527025 03.05.2022

CE 0483



Фото 24.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY elegance абатмент BioHPP 0° высота 4 мм. Вид



BioHPP copaSKY elegance Abutment 15° Höhe 4 mm

CE
0483

- | | |
|--|--|
| (EN) BioHPP copaSKY elegance abutment
15° height 4 mm | (FR) BioHPP copaSKY elegance pilier 15°
hauteur 4 mm |
| (IT) BioHPP copaSKY elegance abutment
15° alt. 4 mm | (ES) BioHPP copaSKY elegance aditamento
15° altura 4 mm |
| (PT) Pilar BioHPP copaSKY elegance 15°
altura 4 mm | (PL) Łącznik BioHPP copaSKY elegance 15°
wysokość 4 mm |
| (CS) Abutment BioHPP copaSKY elegance
15° výška 4 mm | (SK) Abutment 15° BioHPP copaSKY
elegance výška 4 mm |
| (HU) BioHPP copaSKY elegance csomk 15°
magasság: 4 mm | (RO) Bont BioHPP copaSKY elegance 15°
înălțime 4 mm |
| (BG) Настройка BioHPP copaSKY
elegance 15°, височина 4 mm | (EL) Κολώβωμα 15° BioHPP copaSKY
elegance, ύψους 4 mm |
| (SL) Abutment BioHPP copaSKY elegance
15° višina 4 mm | (HR) BioHPP copaSKY elegance
nadogradnja 15°, visina 4 mm |
| (SV) BioHPP copaSKY elegance förankring
15° höjd 4 mm | (LT) BioHPP copaSKY elegance 15°
abatmentas, aukštis 4 mm |
| (ET) BioHPP copaSKY elegance abutment
15°, kõrgus 4 mm | (LV) BioHPP copaSKY elegance balsts 15°
augstums 4 mm |
| (DA) BioHPP copaSKY elegance Abutment
15° højde 4 mm | |



UDI

HIBC



EBRM/COPA/EM/150/33/534225/18D20221019L


Qty 1 REF COPAEM15 LOT 534225 19.10.2022

Фото 25.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY elegance абатмент BioHPP 15° высота 4 мм, в

- винт абатмента – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.



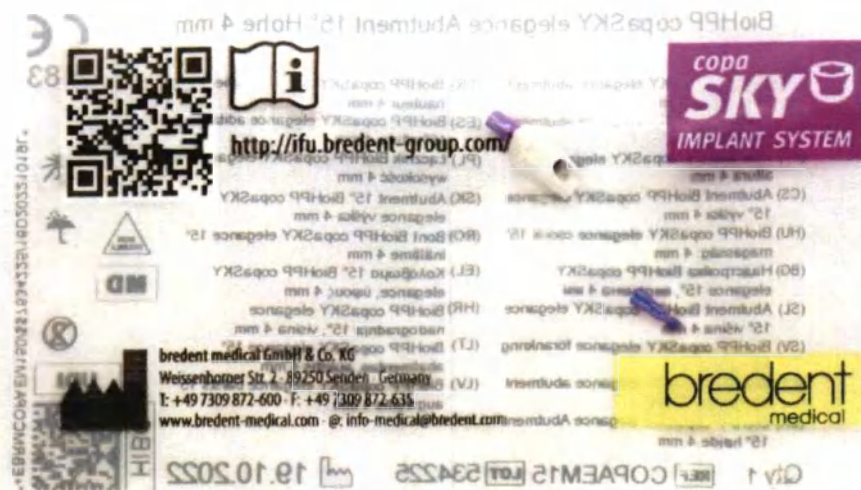

BioHPP copaSKY elegance Abutment 15° Höhe 4 mm


CE
0483

(EN) BioHPP copaSKY elegance abutment 15° height 4 mm	(FR) BioHPP copaSKY elegance pilier 15° hauteur 4 mm
(IT) BioHPP copaSKY elegance abutment 15° alt. 4 mm	(ES) BioHPP copaSKY elegance aditamento 15° altura 4 mm
(PT) Pilar BioHPP copaSKY elegance 15° altura 4 mm	(PL) Łącznik BioHPP copaSKY elegance 15° wysokość 4 mm
(CS) Abutment BioHPP copaSKY elegance 15° výška 4 mm	(SK) Abutment 15° BioHPP copaSKY elegance výška 4 mm
(HU) BioHPP copaSKY elegance csomk 15° magasság: 4 mm	(RO) Bont BioHPP copaSKY elegance 15° înălțime 4 mm
(BG) Надгробна BioHPP copaSKY elegance 15°, височина 4 mm	(EL) Κολοβωμα 15° BioHPP copaSKY elegance, ύψους 4 mm
(SL) Abutment BioHPP copaSKY elegance 15° višina 4 mm	(HR) BioHPP copaSKY elegance nadogradnja 15°, visina 4 mm
(SV) BioHPP copaSKY elegance förankring 15° höjd 4 mm	(LT) BioHPP copaSKY elegance 15° abatmentas, aukštis 4 mm
(ET) BioHPP copaSKY elegance abutment 15°, kõrgus 4 mm	(LV) BioHPP copaSKY elegance balsts 15° augstums 4 mm
(DA) BioHPP copaSKY elegance Abutment 15° højde 4 mm	

Qty 1 REF COPAEM15 LOT 534225 19.10.2022



Фото 25.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY elegance абатмент BioHPP 15° высота 4 мм.

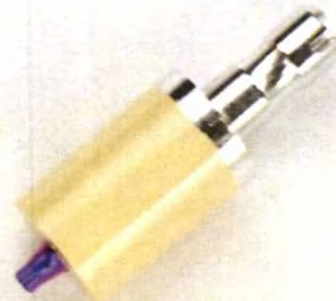

BioHPP copaSKY elegance prefab CSK

CE
0483

(EN) BioHPP copaSKY elegance prefab CSK	(FR) BioHPP copaSKY elegance prefab CSK
(IT) BioHPP copaSKY elegance prefab CSK	(ES) BioHPP copaSKY elegance prefab CSK
(PT) Conjunto prefabricado BioHPP copaSKY elegance CSK	(PL) Zestaw prefabrykatów BioHPP copaSKY elegance CSK
(CS) BioHPP copaSKY elegance prefab set CSK	(SK) BioHPP copaSKY elegance prefab Set CSK
(HU) BioHPP copaSKY elegance prefab Set CSK	(RO) BioHPP copaSKY elegance prefab CSK
(BG) Сглобяема надстройка BioHPP copaSKY elegance prefab. CSK	(EL) Προσάτι BioHPP copaSKY elegance set CSK
(SL) Set BioHPP copaSKY elegance prefab CSK	(HR) BioHPP copaSKY elegance prefab CSK
(SV) BioHPP copaSKY elegance prefab set CSK	(LT) BioHPP copaSKY elegance atramu niniojys CSK
(ET) BioHPP copaSKY elegance prefab CSK	(LV) BioHPP copaSKY elegance paneļu CSK
(DA) BioHPP copaSKY elegance prefab CSK	

+EBRMCPA PFM00/57537243/16D20230110



MD



UDI

CEH



Qty 1 REF COPAPFM0 LOT 537243 10.01.2023

Фото 26.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY elegance абатмент обрабатываемый BioHPP, в

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

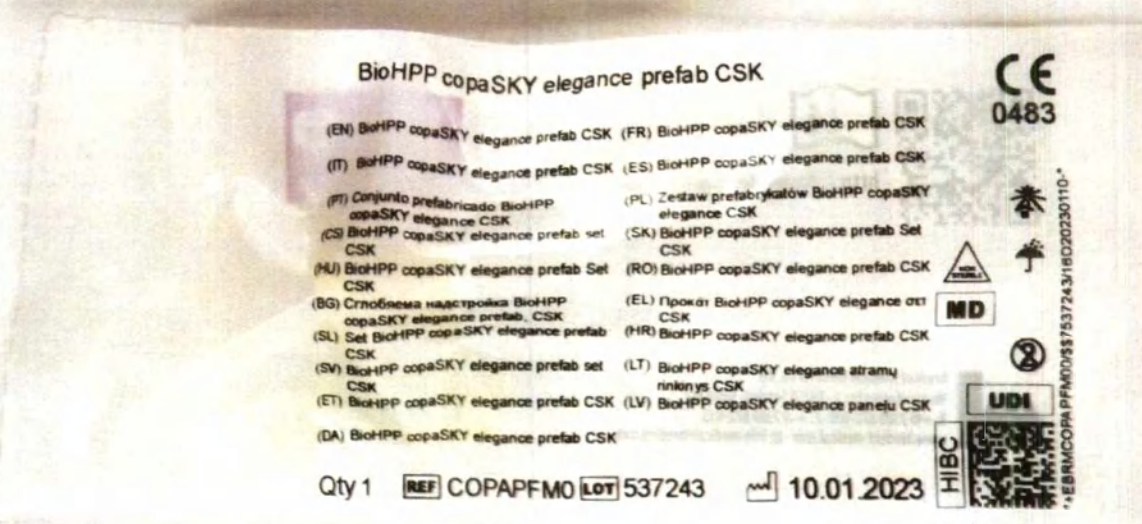


Фото 26.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY elegance абатмент обрабатываемый BioHPP.



copaSKY EXSO Abutment 0° Höhe 1.5 mm



(EN) copaSKY EXSO abutment 0° height 1.5 mm	(FR) copaSKY EXSO pilier 0° hauteur 1.5 mm
(IT) copaSKY EXSO abutment 0° alt. 1.5 mm	(ES) copaSKY EXSO aditamento 0° altura 1.5 mm
(PT) Pilar copaSKY EXSO 0° altura 1.5 mm	(PL) łącznik copaSKY EXSO 0° wysokość 1.5 mm
(CS) copaSKY EXSO Abutment 0° výška 1.5 mm	(SK) Abutment 0° copaSKY EXSO výška 1.5 mm
(HU) copaSKY EXSO csont 0°, magasság: 1.5 mm	(RO) Bont copaSKY EXSO 0° înălțime 1.5 mm
(BG) Надстройка copaSKY EXSO 0° височина 1.5 mm	(EL) Κολόβωμα 0° copaSKY EXSO, ύψους 1.5 mm
(SL) Abutment copaSKY EXSO 0° višina 1.5 mm	(HR) copaSKY EXSO nadogradnja 0°, visina 1.5 mm
(SV) copaSKY EXSO förankring 0° höjd 1.5 mm	(LT) copaSKY EXSO 0° abatmentas, aukštis 1.5 mm
(ET) copaSKY EXSO abutment 0°, kõrgus 1.5 mm	(LV) copaSKY EXSO balsts 0° augstums 1.5 mm
(DA) copaSKY EXSO Abutment 0° højde 1.5 mm	

Qty 1 REF COPEX002 LOT 536610 15.12.2022



MD
UDI
HIBC
COPEX002057536610/18D20221215G

Фото 27.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY EXSO абатмент 0° высота 1.5 мм, в составе:

- винт абатмента – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.



copaSKY EXSO Abutment 0° Höhe 3 mm

CE
0483

(EN) copaSKY EXSO abutment 0° height 3 mm	(FR) copaSKY EXSO pilier 0° hauteur 3 mm
(IT) copaSKY EXSO abutment 0° alt. 3 mm	(ES) copaSKY EXSO aditamento 0° altura 3 mm
(PT) Pilar copaSKY EXSO 0° altura 3 mm	(PL) łącznik copaSKY EXSO 0° wysokość 3 mm
(CS) copaSKY EXSO Abutment 0° výška 3 mm	(SK) Abutment 0° copaSKY EXSO výška 3 mm
(HU) copaSKY EXSO csónk 0°, magasság: 3 mm	(RO) Bont copaSKY EXSO 0° înălțime 3 mm
(BG) Надстройка copaSKY EXSO 0°, височина 3 mm	(EL) Κολόβωμα 0° copaSKY EXSO, ύψους 3 mm
(SL) Abutment copaSKY EXSO 0° višina 3 mm	(HR) copaSKY EXSO nadogradnja 0°, visina 3 mm
(SV) copaSKY EXSO förankring 0° höjd 3 mm	(LT) copaSKY EXSO 0° abatmentas, aukštis 3 mm
(ET) copaSKY EXSO abutment 0°, kõrgus 3 mm	(LV) copaSKY EXSO balsts 0° augstums 3 mm
(DA) copaSKY EXSO Abutment 0° højde 3 mm	

Qty 1 REF COPEX003 LOT 536162 30.11.2022



MD



UDI

HIBC



•+EBRMCOPEX0030A\$7536162/18D20221130F•

Фото 28.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY EXSO абатмент 0° высота 3 мм, в составе:

- винт абатмента – 1 шт.:

- инструкция по применению – 1 шт.


Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

copaSKY EXSO Abutment 0° Höhe 3 mm

CE
0483

(EN) copaSKY EXSO abutment 0° height 3 mm	(FR) copaSKY EXSO pilier 0° hauteur 3 mm
(IT) copaSKY EXSO abutment 0° alt 3 mm	(ES) copaSKY EXSO aditamento 0° altura 3 mm
(PT) Pilar copaSKY EXSO 0° altura 3 mm	(PL) Łącznik copaSKY EXSO 0° wysokość 3 mm
(CS) copaSKY EXSO Abutment 0° výška 3 mm	(SK) Abutment 0° copaSKY EXSO výška 3 mm
(HU) copaSKY EXSO csomk 0°, magasság 3 mm	(RO) Bont copaSKY EXSO 0° înălțime 3 mm
(BG) Надстройка copaSKY EXSO 0°, височина 3 mm	(EL) Κολοβήμα 0° copaSKY EXSO, ύψους 3 mm
(SL) Abutment copaSKY EXSO 0° višina 3 mm	(HR) copaSKY EXSO nadogradnja 0°, visina 3 mm
(SV) copaSKY EXSO förankning 0° höjd 3 mm	(LT) copaSKY EXSO 0° abatmentas, aukštis 3 mm
(ET) copaSKY EXSO abutment 0°, kõrgus 3 mm	(LV) copaSKY EXSO balsts 0° augstums 3 mm
(DA) copaSKY EXSO Abutment 0° højde 3 mm	

Qty 1 REF COPEX003 LOT 536162 30.11.2022

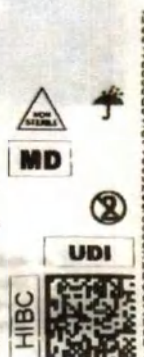

copaSKY EXSO Abutment 0° Höhe 3 mm

CE 0483

QR code

MD

UDI

copaSKY IMPLANT SYSTEM

breident medical

breident medical GmbH & Co. KG
Weissenhörn Str. 2 · 89250 Senden · Germany
T: +49 7309 872-600 · F: +49 7309 872-635
www.breident-medical.com · info-medical@breident.com

30.11.2022

Фото 28.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY EXSO абатмент 0° высота 3 мм. Вид в



copa SKY  **copaSKY EXSO Abutment 17,5°**
Höhe 1 mm

(EN) copaSKY EXSO abutment 17,5° height 1 mm (FR) copaSKY EXSO pilier 17,5° hauteur 1 mm
(IT) copaSKY EXSO abutment 17,5° alt. 1 mm (ES) copaSKY EXSO aditamento 17,5° altura 1 mm

Qty 1 **LOT** 524213 **REF** COPEX172

breident  **medical** bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhorner Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: +49 7309 872-600 | F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com | @ info-medical@bredent.com

CE
0483



 +EBR/COPEX1720/557524213V

Фото 29.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY EXSO абатмент 17,5° высота 1 мм, в составе:

- винт абатмента – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

**(DE) Gebrauchsanweisung
copaSKY Prothetik**

009897EX-20190301



CE
0483

Bitte diese Gebrauchsanweisung vor dem Produkteinsatz ausführlich lesen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, lei-
Hersteller jede Haftung ab.

**copa
SKY**

**copaSKY EXSO Abutment 17,5°
Höhe 1 mm**

(EN) copaSKY EXSO abutment
17,5° height 1 mm

(FR) copaSKY EXSO pilier
17,5° hauteur 1 mm

(IT) copaSKY EXSO abutment
17,5° alt. 1 mm

(ES) copaSKY EXSO aditamento
17,5° altura 1 mm

Qty 1

LOT 524213


REF

COPEX172

**bredent
medical**

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhörn Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: +49 7309 872-600 | F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com | info-medical@bredent.com

CE
0483

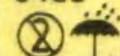

EBRM/COPEX172088/524213/13V

geschriebener

Reduziert
mentschraube
niumoxid 110
Es ist darauf zu
in Abhängigkeit
in den Mund
Fingliederung
bredent medik



AC

Trennvorgang

Wird das cop
(siehe Abbildung)
tatanalog mit
Giflex-TR (RE
bredent GmbH
mantscheibe
Anschließend
zu polieren

Verwendung
Auf den copa
stellung der Fp
sil verwendet
580RTS25, 58
von rententio

Фото 29.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY EXSO абатмент 17,5° высота 1 мм. Вид в



**copa
SKY**

**copaSKY EXSO Abutment
17,5° Höhe 2 mm**

**CE
0483**

(EN) copaSKY EXSO abutment
17,5° height 2 mm

(FR) copaSKY EXSO pilier
17,5° hauteur 2 mm


(IT) copaSKY EXSO abutment
17,5° alt. 2 mm

(ES) copaSKY EXSO aditamento
17,5° altura 2 mm

Qty 1

LOT 512015

REF COPEX173

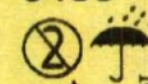

+EBRMCOPEX1730483512015T

**bredent
medical**

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhofer Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: +49 7309 872-600 | F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com | @ info-medical@bredent.com

Фото 30.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY EXSO абатмент 17,5° высота 2 мм, в составе:

- винт абатмента – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.



copa SKY copaSKY EXSO Abutment 35°
Höhe 1 mm

(EN) copaSKY EXSO abutment 35° height 1 mm (FR) copaSKY EXSO pilier 35° hauteur 1 mm
(IT) copaSKY EXSO abutment 35° alt. 1 mm (ES) copaSKY EXSO aditamento 35° altura 1 mm

Qty 1 LOT 503787 REF COPEX352

bredent medical  bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhofer Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: +49 7309 872-600 | F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com | @info-medical@bredent.com

CE 0483












Фото 31.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY EXSO абатмент 35° высота 1 мм, в составе:

- винт абатмента – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.



**(DE) Gebrauchsanweisung
copaSKY Prothetik**

009897EX-20190301



CE
0483

Bitte diese Gebrauchsanweisung vor dem Produkteinsatz ausführlich lesen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, lehnt der Hersteller jede Haftung ab.

1. Produktbeschreibung / Indikation

Die copaSKY Abutments dienen zur prothetischen Restauration.

**copa
SKY**

**copaSKY EXSO Abutment 35°
Höhe 1 mm**

(EN) copaSKY EXSO abutment
35° height 1 mm

(FR) copaSKY EXSO pilier 35°
hauteur 1 mm

(IT) copaSKY EXSO abutment
35° alt. 1 mm

(ES) copaSKY EXSO aditamento
35° altura 1 mm




Qty 1 **LOT** 503787

REF COPEX352

**bredent
medical**

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhofer Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: +49 7309 872-600 | F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com | info-medical@bredent.com


CE
0483

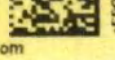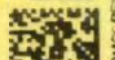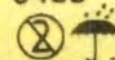

Bei Reduzierung
ment-schraub
nitoxid 110
Es ist darauf z
in Abhängigk
in den Mund
Eingliederung
bredent medi



Trennvorgang
Wird das cop
siehe Abbild
Stanzung m
flex-TR (Ri
bredent Gr
mantscheib
Anschließen
zu polieren

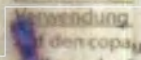

Verwendung
auf den copa
stellung der
st verwendet
S80RTS25, S8
von rententio
Die copaSKY
jedoch die Kar
bredent GmbH

Die copaSKY Abutments sind Titankonstruktionen mit einer individuellen Messtruktur für die individuell
im CEREC®-Verfahren hergestellten Suprakonstruktionen. Die Abutments sind in den Gingivahöhen
1,5 mm und 3 mm verfügbar.

Фото 31.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY EXSO абатмент 35° высота 1 мм. Вид в

индивидуальной упаковке



**copa
SKY**

**copaSKY EXSO Abutment 35°
Höhe 2 mm**

(EN) copaSKY EXSO abutment
35° height 2 mm

(FR) copaSKY EXSO pilier 35°
hauteur 2 mm

(IT) copaSKY EXSO abutment
35° alt. 2 mm

(ES) copaSKY EXSO aditamento
35° altura 2 mm

Qty 1 **LOT** 510161

REF COPEX353

**bredent
medical**

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhomer Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: +49 7309 872-600 | F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com | @ info-medical@bredent.com

CE
0483



+ EBRMCOPEX35303375 101611

- абатмент – 1 шт.;
- винт абатмента – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

(DE) Gebrauchsanweisung
copaSKY Prothetik

009897EX-20190301



CE
0483

Bitte diese Gebrauchsanweisung vor dem Produkteinsatz ausführlich lesen.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, lehnt die Haftung ab.

copaSKY

copaSKY EXSO Abutment 35°
Höhe 2 mm

(EN) copaSKY EXSO abutment
35° height 2 mm

(FR) copaSKY EXSO pilier 35°
hauteur 2 mm

(IT) copaSKY EXSO abutment
35° alt. 2 mm

(ES) copaSKY EXSO aditamento
35° altura 2 mm

Qty 1



LOT 510161

REF COPEX353

bredent
medical

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhofer Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: +49 7309 872-600 | F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com | info-medical@bredent.com

CE
0483

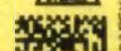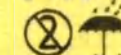

*EBRMCCPEX353033575 10 16 17

Bei Reduzier
mentschraub
niumoxid 111
Es ist darauf
in Abhängig
in den Mund
eingeliefern
bredent max



Trennvorgang
Wird das co
(siehe 7.1.1)
tatanalog
Giflex-TR 1
bredent Gi
mantschei
Anschließe
zu polier-

Verwendung:
Auf den cop
stellung der
sil verwen
580RTS25, 5
von rentent
Die copaSKY

Is wer an
Verson
X173,
ing, als
Die geraden
angulierten
höhen 1 mm



Фото 33.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY EXSO абатмент 35° высота 2 мм. Вид в



copaSKY TiSi.snap Abutment Höhe 1,5 mm

CE
0483

(EN) copaSKY TiSi.snap abutment height 1.5 mm	(FR) copaSKY TiSi.snap pilier hauteur 1,5 mm
(IT) copaSKY TiSi.snap abutment alt. 1,5 mm	(ES) copaSKY TiSi.snap aditamento altura 1,5 mm
(PT) Pilar copaSKY TiSi.snap altura 1,5 mm	(PL) Łącznik copaSKY TiSi.snap wysokość 1,5 mm
(CS) copaSKY TiSi.snap abutment výška 1,5 mm	(SK) Abutment copaSKY TiSi.snap výška 1,5 mm
(HU) copaSKY TiSi.snap csont, magasság: 1,5 mm	(RO) Bont copaSKY TiSi.snap înălțime 1,5 mm
(BG) Настройка copaSKY TiSi.snap височина 1,5 мм	(EL) Κολόβωμα copaSKY TiSi.snap, ύψους 1,5 mm
(SL) Abutment copaSKY TiSi.snap, višina 1,5 mm	(HR) copaSKY TiSi.snap nadogradnja, visina 1,5 mm
(SV) copaSKY TiSi.snap förankring höjd 1,5 mm	(LT) copaSKY TiSi.snap abatmentas, aukštis 1,5 mm
(ET) copaSKY TiSi.snap abutment, kõrgus 1,5 mm	(LV) copaSKY TiSi.snap balsts augstums 1,5 mm
(DA) copaSKY TiSi.snap Abutment højde 1,5 mm	

Qty 1 REF COPTIS12 LOT 533016 28.09.2022



- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

copaSKY TiSi.snap Abutment Höhe 1,5 mm

CE 0483

  <http://ifu.bredent-group.com/>

copaSKY
IMPLANT SYSTEM

bredent
medical

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhofer Str. 2 · 89250 Senden · Germany
T: +49 7309 872-600 · F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com · e: info-medical@bredent.com

28.09.2022

copaSKY TiSi.snap Abutment Höhe 1,5 mm

(EN) copaSKY TiSi.snap abutment height 1,5 mm	(FR) copaSKY TiSi.snap pilier hauteur 1,5 mm
(IT) copaSKY TiSi.snap abutment alt. 1,5 mm	(ES) copaSKY TiSi.snap aditamento altura 1,5 mm
(PT) Pilar copaSKY TiSi.snap altura 1,5 mm	(PL) Łącznik copaSKY TiSi.snap wysokość 1,5 mm
(CS) copaSKY TiSi.snap abutment výška 1,5 mm	(SK) Abutment copaSKY TiSi.snap výška 1,5 mm
(HU) copaSKY TiSi.snap csomk. magasság 1,5 mm	(RO) Bont copaSKY TiSi.snap înălțime 1,5 mm
(BG) Надръстника copaSKY TiSi.snap височина 1,5 мм	(EL) Κοιλόβραχο copaSKY TiSi.snap, ύψους 1,5 mm
(SL) Abutment copaSKY TiSi.snap, višina 1,5 mm	(HR) copaSKY TiSi.snap nadogradnja, visina 1,5 mm
(SV) copaSKY TiSi.snap förankring höjd 1,5 mm	(LT) copaSKY TiSi.snap abatmentas, aukštis 1,5 mm
(ET) copaSKY TiSi.snap abutment, kõrgus 1,5 mm	(LV) copaSKY TiSi.snap balsts augstums 1,5 mm
(DA) copaSKY TiSi.snap Abutment højde 1,5 mm	

Qty 1  COPTISI2  533016  28.09.2022

CE 0483

EBRMCOPTISI20487533016/16D20220628C



copaSKY TiSi.snap Abutment Höhe 3 mm

CE
0483

(EN) copaSKY TiSi.snap abutment height 3 mm	(FR) copaSKY TiSi.snap orlier hauteur 3 mm
(IT) copaSKY TiSi.snap abutment alt. 3 mm	(ES) copaSKY TiSi.snap aditamento altura 3 mm
(PT) Pilar copaSKY TiSi.snap altura 3 mm	(PL) Łącznik copaSKY TiSi.snap wysokość 3 mm
(CS) copaSKY TiSi.snap abutment výška 3 mm	(SK) Abutment copaSKY TiSi.snap výška 3 mm
(HU) copaSKY TiSi.snap oszék magasság 3 mm	(RO) Bont copaSKY TiSi.snap înălțime 3 mm
(BG) Надстройка copaSKY TiSi.snap височина 3 mm	(EL) Κολόβωμα copaSKY TiSi.snap ύψους 3 mm
(SL) Abutment copaSKY TiSi.snap višina 3 mm	(HR) copaSKY TiSi.snap nadogradnja visina 3 mm
(SV) copaSKY TiSi.snap förankring höjd 3 mm	(LT) copaSKY TiSi.snap abatmentas aukštis 3 mm
(ET) copaSKY TiSi.snap abutment kõrgus 3 mm	(LV) copaSKY TiSi.snap balsts augstums 3 mm
(DA) copaSKY TiSi.snap Abutment højde 3 mm	



MD



UDI

HIBC



•EBRMCCOPTIS30/\$57533017/16D20220621L•

Qty 1 REF COPTISI3 LOT 533017 21.09.2022

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.



<http://ifu.bredent-group.com/>





bredent
medical


bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhofer Str. 2 • 89250 Senden • Germany
T: +49 7309 872-600 • F: +49 7309 872-835
www.bredent-medical.com • info-medical@bredent.com

copaSKY TiSi.snap Abutment Höhe 3 mm

CE
0483

(EN) copaSKY TiSi snap abutment height 3 mm	(FR) copaSKY TiSi snap pilier hauteur 3 mm
(IT) copaSKY TiSi snap abutment alt 3 mm	(ES) copaSKY TiSi snap aditamento altura 3 mm
(PT) Pilar copaSKY TiSi snap altura 3 mm	(PL) Łącznik copaSKY TiSi snap wysokość 3 mm
(CS) copaSKY TiSi snap abutment výška 3 mm	(SK) Abutment copaSKY TiSi snap výška 3 mm
(HU) copaSKY TiSi snap csanak magasság 3 mm	(RO) Bont copaSKY TiSi snap înălțime 3 mm
(BG) Надстройка copaSKY TiSi snap височина 3 mm	(EL) Κολόβωμα copaSKY TiSi snap ύψους 3 mm
(SL) Abutment copaSKY TiSi snap. višina 3 mm	(HR) copaSKY TiSi snap nadogradnja. visina 3 mm
(SV) copaSKY TiSi snap förankning höjd 3 mm	(LT) copaSKY TiSi snap abatmentas. aukštis 3 mm
(ET) copaSKY TiSi snap abutment. kõrgus 3 mm	(LV) copaSKY TiSi snap balsts augstums 3 mm
(DA) copaSKY TiSi snap Abutment højde 3 mm	

Qty 1 REF COPTIS13 LOT 533017 21.09.2022

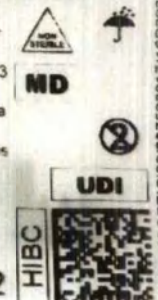



copaSKY Brücken- und Stegabutment Höhe 2,7mm

(EN) copaSKY bridge and bar abutment height 2.7mm	(FR) copaSKY pilier pour bridge et barre hauteur 2.7mm
(IT) copaSKY abutment per ponti e barre alt. 2.7mm	(ES) copaSKY aditamento para puentes y barras altura 2.7mm
(PT) copaSKY Pilar de ponte e barras altura 2.7mm	(PL) copaSKY Łączniki mostkowe i kładkowe Wysokość 2.7mm
(CS) copaSKY Můstkový a čepový abutment Výška 2.7mm	(SK) copaSKY mostikové a tyčkové abutmenty Výška 2.7mm
(HU) copaSKY hid- és gátépítmény magasság: 2.7mm	(RO) copaSKY bont pentru punți și coroane înălțime 2.7mm
(BG) copaSKY надстройка за мостове и траверси Височина 2.7mm	(EL) copaSKY Κολόβωμα γέφυρας και οδών Ύψος 2.7mm
(SL) copaSKY Abutmenti za mostičke in proteze Višina 2.7mm	(HR) copaSKY nadogradnje s mostom i prečkom Visina 2.7mm
(SV) copaSKY brygg- och ställnings förankring Höjd 2.7mm	(LT) copaSKY tiltų ir skersinių abatmentas Aukštis 2.7mm
(ET) copaSKY silla- ja purdeabutment Kõrgus 2.7mm	(LV) copaSKY tiltu un stieņa konstrukcija Augstums 2.7mm
(DA) copaSKY bro- og mellemstykke-abutment Højde 2.7mm	

CE
0483



MD



UDI

HIBC



EBRMCPA BRS20A\$7536147/16D202211303

Qty 1 REF COPABRS2 LOT 536147 30.11.2022

- абатмент – 1 шт.;
- винт абатмента – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

copaSKY Brücken- und Stegabutment Höhe 2,7mm




<http://ifu.bredent-group.com/>

copaSKY IMPLANT SYSTEM




bredent medical

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhörn Str. 2-80250 Senden-Germany
T: +49 7309 872-600 • F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com • e: info-medical@bredent.com

30.11.2022 536147

copaSKY Brücken- und Stegabutment Höhe 2,7mm

- | | |
|--|--|
| (EN) copaSKY bridge and bar abutment height 2.7mm | (FR) copaSKY pilier pour bridge et barre hauteur 2.7mm |
| (IT) copaSKY abutment per ponti e barre alt. 2.7mm | (ES) copaSKY aditamento para puentes y barras altura 2.7mm |
| (PT) copaSKY Pilar de ponte e barras altura 2.7mm | (PL) copaSKY łącznik mostkowe i kładkowe Wysokość 2.7mm |
| (CS) copaSKY Můstkový a čepový abutment Výška 2.7mm | (SK) copaSKY mostikové a tyčkové abutmenty Výška 2.7mm |
| (HU) copaSKY hid- és gátepítvány magasság 2.7mm | (RO) copaSKY bont pentru punți și coroare înălțime 2.7mm |
| (BG) copaSKY надстройка за мостове и траверси Височина 2.7mm | (EL) copaSKY Κολώβευμα γέφυρας και παθών Υψος 2.7mm |
| (SL) copaSKY Abutmenti za mostičke in proteze Višina 2.7mm | (HR) copaSKY nadogradnje s mostom i predkom Visina 2.7mm |
| (SV) copaSKY brygg- och ställnings förankring Höjd 2.7mm | (LT) copaSKY tiltų ir skersinių abatmentas Aukštis 2.7mm |
| (ET) copaSKY silla- ja purdeabutment Kõrgus 2.7mm | (LV) copaSKY tilts un stienā konstrukcija Augstums 2.7mm |
| (DA) copaSKY bro- og mellemstykke- abutment Højde 2.7mm | |

Qty 1 REF COPABRS2 LOT 536147 30.11.2022

CE 0483



UDI



EBRM COPA BRS20/\$7538147/16D202211303

Фото 36.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент для мостов и балок высота 2,7 мм.



copaSKY Brücken- und Stegabutment Höhe 3,7mm

(EN) copaSKY bridge and bar abutment height 3,7mm	(FR) copaSKY pilier pour bridge et barre hauteur 3,7mm
(IT) copaSKY abutment per ponti e barre alt. 3,7mm	(ES) copaSKY aditamento para puentes y barras altura 3,7mm
(PT) copaSKY Pilar de ponte e barras altura 3,7mm	(PL) copaSKY łączniki mostkowe i kładkowe Wysokość 3,7mm
(CS) copaSKY Můstkový a čepový abutment Výška 3,7mm	(SK) copaSKY mostikové a tyčkové abutmenty Výška 3,7mm
(HU) copaSKY hid- és gátépitmény magasság: 3,7mm	(RO) copaSKY bont pentru punți și coroare înălțime 3,7mm
(BG) copaSKY надстройка за мостове и траверси Височина 3,7mm	(EL) copaSKY Κολόβωμα γέφυρας και ράβδων Ύψος 3,7mm
(SL) copaSKY Abutmenti za mostičke in proteze Višina 3,7mm	(HR) copaSKY nadogradnje s mostom i prečkom Visina 3,7mm
(SV) copaSKY brygg- och ställnings förankring Höjd 3,7mm	(LT) copaSKY tiltų ir skersinių abatmentas Aukštis 3,7mm
(ET) copaSKY silla- ja purdeabutment Kõrgus 3,7mm	(LV) copaSKY tilts un stieņa konstrukcija Augstums 3,7mm
(DA) copaSKY bro- og mellemstykke- abutment Højde 3,7mm	

Qty 1 REF COPABRS3 LOT 535437 18.11.2022

CE
0483



MD



UDI

HIBC



EBRMCOPA BRS30/\$7535437/16D20221118B

37.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент для мостов и балок высота 3,7 мм, в

- винт абатмента – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

copaSKY IMPLANT SYSTEM

<http://ifu.bredent-group.com/>

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhormer Str. 2 • 89250 Senden • Germany
T: +49 7309 872-600 • F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com • info-medical@bredent.com

UDI

REF COPABRS3 LOT 535437

18.11.2022

copaSKY Brücken- und Stegabutment Höhe 3,7mm

- | | |
|--|--|
| (EN) copaSKY bridge and bar abutment height 3.7mm | (FR) copaSKY pilier pour bridge et barre hauteur 3.7mm |
| (IT) copaSKY abutment per ponti e barre alt. 3.7mm | (ES) copaSKY aditamento para puentes y barras altura 3.7mm |
| (PT) copaSKY Pilar de ponte e barras altura 3.7mm | (PL) copaSKY łącznik mostkowe i kładkowe Wysokość 3.7mm |
| (CS) copaSKY Můstkový a čepový abutment Výška 3.7mm | (SK) copaSKY mostíkové a tyčkové abutmenty Výška 3.7mm |
| (HU) copaSKY hid- és gátepítmény magasság 3.7mm | (RO) copaSKY bont pentru punți și coroare înălțime 3.7mm |
| (BG) copaSKY надстройка за мостове и траверси Височина 3.7mm | (EL) copaSKY Κολοβώμα γέφυρας και παθών Υψος 3.7mm |
| (SL) copaSKY Abutmenti za mostčke in proteze Višina 3.7mm | (HR) copaSKY nadogradnje s mostom i prečkom Visina 3.7mm |
| (SV) copaSKY brygg- och ställnings förankring Höjd 3.7mm | (LT) copaSKY tiltų ir skersinių abatmentas Aukštis 3.7mm |
| (ET) copaSKY silla- ja purdeabutment Kõrgus 3.7mm | (LV) copaSKY tilts un stieņa konstrukcija Augstums 3.7mm |
| (DA) copaSKY bro- og mellemstykke-abutment Højde 3.7mm | |

Qty 1 REF COPABRS3 LOT 535437 18.11.2022

CE
0483



UDI

REF COPABRS3 LOT 535437 18.11.2022

REF COPABRS3 LOT 535437 18.11.2022

REF COPABRS3 LOT 535437 18.11.2022

REF COPABRS3 LOT 535437 18.11.2022

REF COPABRS3 LOT 535437 18.11.2022

REF COPABRS3 LOT 535437 18.11.2022

REF COPABRS3 LOT 535437 18.11.2022

Фото 37.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент для мостов и балок высота 3,7 мм.



copaSKY Abformabutment offener Löffel Höhe 2 mm

CE
0483

- | | |
|---|---|
| (EN) copaSKY impression abutment open tray height 2 mm | (FR) copaSKY transfert porte- empreinte ouvert hauteur 2 mm |
| (IT) copaSKY transfert da impronta cuochiaio per impronta finestrata alt. 2 | (ES) copaSKY aditamento de impresión cubeta abierta altura 2 mm |
| (PT) Pilar de impressão copaSKY, moldeira aberta, altura 2 mm | (PL) Łącznik formujący copaSKY M otwarta łyżka wydłuskowa wysokość 2 mm |
| (CS) otiskový abutment copaSKY, otevřená lžice, výška 2 mm | (SK) Odtlačkový abutment copaSKY otvorená lyžica výška 2 mm |
| (HU) copaSKY mintázócsont, nyitott kanál, magasság: 2 mm | (RO) Bont de amprentare copaSKY lingură deschisă înălțime 2 mm |
| (BG) Набгстроика за снесане на отечгты copaSKY с отворена лъица, | (EL) Κολλήματα ορυγματος copaSKY ανοικτού δίσκου, ύψους 2 mm |
| (SL) Abutment za izoblikovanje copaSKY odprta žlica, višina 2 mm | (HR) copaSKY otisna nadogradnja, otvorena žlica, visina 2 mm |
| (SV) copaSKY avtrycksförantering öppen sked höjd 2 mm | (LT) copaSKY atspaudo darymo abatmento atvira šauklėlis, aukštis 2 mm |
| (ET) copaSKY jäljendi abutment M, avatud lusikas, kõrgus 2 mm | (LV) copaSKY atvērtais plātnes veidošanas baršis augstums 2 mm |
| (DA) copaSKY aftryks-abutment åben ske høide 2 mm | |

Qty 1 REF COPAPA22 LOT 533911 18.10.2022



UDI

HIBC



EBRMCOPA PA 220/533911/18D20221018

- абатмент– 1 шт.;
- встроенный винт оттискового абатмента – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.





<http://ifu.bredent-group.com/>







bredent medical GmbH & Co. KG
 Weissenhofer Str. 2 · 89250 Senden, Germany
 T: +49 7309 872-600 · F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com · info-medical@bredent.com

copaSKY Abformabutment offener Löffel Höhe 2 mm

CE
0483

- | | |
|---|---|
| (EN) copaSKY impression abutment open tray height 2 mm | (FR) copaSKY transfert porte- empreinte ouvert hauteur 2 mm |
| (IT) copaSKY transfert da impronta cucchiaio per impronta finestrata alt. 2 | (ES) copaSKY aditamento de impresión cubeta abierta altura 2 mm |
| (PT) Pilar de impressão copaSKY, moldreira aberta, altura 2 mm | (PL) łącznik formujący copaSKY M otwarta łyżka wyciskowa wysokość 2 mm |
| (CS) otiskový abutment copaSKY, otevřená lžice, výška 2 mm | (SK) Odtlačkový abutment copaSKY otvorená lyžica výška 2 mm |
| (HU) copaSKY mintázócsont, nyitott kanál, magasság: 2 mm | (RO) Bont de amprentare copaSKY lingură deschisă înălțime 2 mm |
| (BG) Надстройка за снемане на отпечатък copaSKY с отворена лъжичка | (EL) Κολόβωμα εκμύζησης copaSKY ανοικτού δίσκου, ύψους 2 mm |
| (SL) Abutment za izoblikovanje copaSKY odprta žlica, višina 2 mm | (HR) copaSKY ošna nadogradnja, otvorena žlica, visina 2 mm |
| (SV) copaSKY avtrycksformantering öppen sked höjd 2 mm | (LT) copaSKY atspaudo darymo abatmento atviras šaukštelis, aukštis 2 mm |
| (ET) copaSKY jäljendi abutment M, avatud lusikas, kõrgus 2 mm | (LV) copaSKY atvērtas plātnes veidošanas balsts augstums 2 mm |
| (DA) copaSKY aftryks-abutment åben ske højde 2 mm | |

Qty 1  COPAPA22  533911  18.10.2022

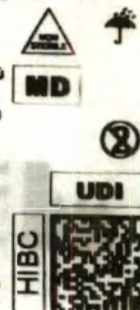

**EIRMCOPA PA220/S\$76339/11/18D202210181*

Фото 38.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент отливочной для открытой ложки высота 2 мм. Вид в индивидуальной упаковке.



copaSKY Abformabutment offener Löffel Höhe 3 mm

CE
0483

- | | |
|---|--|
| (EN) copaSKY impression abutment open tray height 3 mm | (FR) copaSKY transfert porte- empreinte ouvert hauteur 3 mm |
| (IT) copaSKY transfert da impronta cucchiaio per impronta finestrata alt. 3 | (ES) copaSKY aditamento de impresion cubeta abierta altura 3 mm |
| (PT) Pilar de impressão copaSKY, moldeira aberta, altura 3 mm | (PL) Łącznik formujący copaSKY M otwarta łyżka wyciskowa wysokość 3 mm |
| (CS) otiskový abutment copaSKY, otevřená lžice, výška 3 mm | (SK) Odtlačkový abutment copaSKY otvorená lyžica výška 3 mm |
| (HU) copaSKY mintázócsont, nyitott kanal, magasság: 3 mm | (RO) Bont de amprentare copaSKY lingură deschisă înălțime 3 mm |
| (BG) Надстройка за снемане на отпечатък copaSKY с отворена лъжица, | (EL) Κολώβωμα εκμύεσις copaSKY ανοικτού δίσκου, ύψους 3 mm |
| (SL) Abutment za izoblikovanje copaSKY, odprta žlica, višina 3 mm | (HR) copaSKY otisna nadogradnja, otvorena žlica, visina 3 mm |
| (SV) copaSKY avtrycksförankring öppen sked höjd 3 mm | (LT) copaSKY atspaudo darymo abatmento atviras šaukštas, aukštis 3 mm |
| (ET) copaSKY jäljendi abutment M. avatud lusikas, kõrgus 3 mm | (LV) copaSKY atvērtas plātnes veidošanas balsts augstums 3 mm |
| (DA) copaSKY aftryk-abutment åben ske højde 3 mm | |

Qty 1 REF COPAPA32 LOT 534373 02.11.2022



UDI

HIBC



EPRMCPA PA320/\$\$534373/16D20221102G


39.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент отливочной для открытой ложки высота 3

мм. в составе:

- встроенный винт оттискового абатмента – 1 шт;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

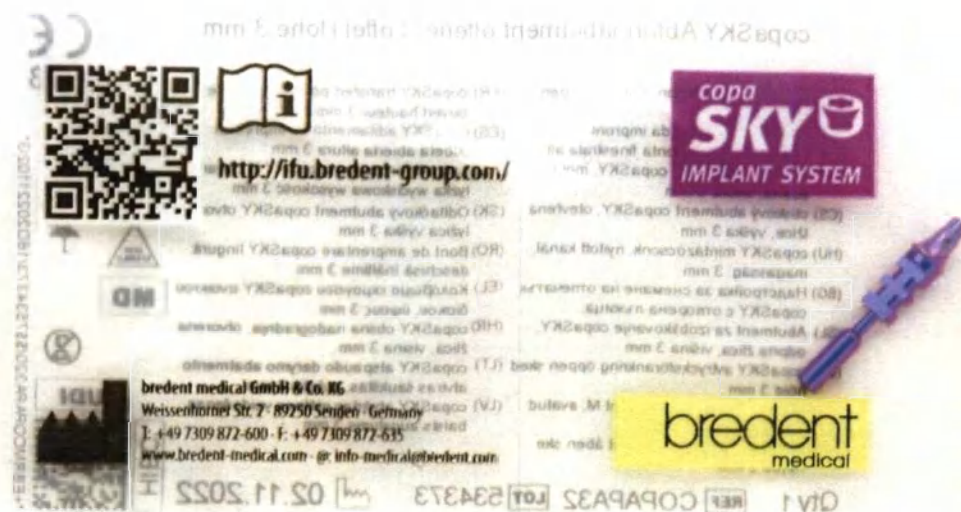

copaSKY Abformabutment offener Löffel Höhe 3 mm

CE
0483

- | | |
|---|--|
| (EN) copaSKY impression abutment open tray height 3 mm | (FR) copaSKY transfert porte- empreinte ouvert hauteur 3 mm |
| (IT) copaSKY transfert da impronta occlusiva per impronta finestrata alt. 3 | (ES) copaSKY aditamento de impresión cubeta abierta altura 3 mm |
| (PT) Pilar de impressão copaSKY, moldreira aberta, altura 3 mm | (PL) Łącznik formujący copaSKY M otwarta łyżka wyciskowa wysokość 3 mm |
| (CS) otiskový abutment copaSKY, otevřená lžice, výška 3 mm | (SK) Odtlačkový abutment copaSKY otvorená lyžica výška 3 mm |
| (HU) copaSKY mintázócsont, nyitott kanál, magasság: 3 mm | (RO) Bont de amprentare copaSKY lingură deschisă înălțime 3 mm |
| (BG) Надстройка за снемане на отпечатък copaSKY с отворена лъжица | (EL) Κολόβωμα εκμολύδου copaSKY ανοικτού δίσκου, ύψους 3 mm |
| (SL) Abutment za izoblikovanje copaSKY, odprta žlica, višina 3 mm | (HR) copaSKY otisna nadogradnja, otvorena žlica, visina 3 mm |
| (SV) copaSKY avtrycksförankring öppen sked höjd 3 mm | (LT) copaSKY atspaudo darymo abatmento atviras šauklėlis, aukštis 3 mm |
| (ET) copaSKY jäljendi abutment M, avalud lusikas, kõrgus 3 mm | (LV) copaSKY atvērtas plātnes veidošanas balsts augstums 3 mm |
| (DA) copaSKY aftryk-abutment åben ske højde 3 mm | |

Qty 1 REF COPAPA32 LOT 534373 02.11.2022

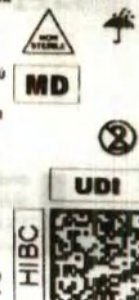


Фото 39.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент отпечаточной для открытой ложки



copaSKY Abformabutment geschlossener Löffel Höhe 2 mm

CE
0483

- | | |
|--|---|
| (EN) copaSKY impression abutment closed tray height 2 mm | (FR) copaSKY transfert porte- empreinte ferme hauteur 2 mm |
| (IT) copaSKY transfert da impronta cucchiaio per impronta a strappo alt. 2 | (ES) copaSKY aditamento de impresion cubeta cerrada altura 2 mm |
| (PT) Pilar de impressão copaSKY moldeira fechada, altura 2 mm | (PL) łącznik formujący copaSKY M zamknięta łyżka wyciskowa wysokość 2 |
| (CS) otiskový abutment copaSKY zavřená lžice výška 2 mm | (SK) Odtlačkový abutment copaSKY zatvorená lyžica výška 2 mm |
| (HU) copaSKY mintazócsónk. zárt kanal. magasság 2 mm | (RO) Bont de amprentare copaSKY lingura închisă înălțime 2 mm |
| (BG) Надстройка за снемане на отпечатък copaSKY със затворена лъжица. | (EL) Κολοβωμα εκμνησίου copaSKY κλειστού δίσκου, ύψους 2 mm |
| (SL) Abutment za izoblikovanje copaSKY zaprta žlica, višina 2 mm | (HR) copaSKY otisna nadogradnja, zatvorena žlica, visina 2 mm |
| (SV) copaSKY avtrycksförankring stängd sked höjd 2 mm | (LT) copaSKY atspaudo darymo abatmento uždaras šaukštis, aukštis 2 mm |
| (ET) copaSKY jäljendi abutment M. suletud lusikas, kõrgus 2 mm | (LV) copaSKY slēgtas plātnes veidošanas balsts augstums 2 mm |
| (DA) copaSKY aftryk-abutment lukket ske højde 2 mm | |

Qty 1 REF COPAGL21 LOT 533657 17.10.2022



MD



UDI

HIBC



EBRMCOPAGL210/557533657/16D20221017P

- абатмент– 1 шт.;
- встроенный винт оттискового абатмента – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.




copaSKY Abformabutment geschlossener Löffel Höhe 2 mm

- | | |
|---|---|
| (EN) copaSKY impression abutment closed tray height 2 mm | (FR) copaSKY transfert porte- empreinte ferme hauteur 2 mm |
| (IT) copaSKY transfert da impronta cuochiaio per impronta a strappo alt 2 | (ES) copaSKY aditamento de impresor cubeta cerrada altura 2 mm |
| (PT) Pilar de impressão copaSKY moldeira fechada, altura 2 mm | (PL) Łącznik formujący copaSKY M zamknięta łyżka wyciskowa wysokość 2 |
| (CS) ořskový abutment copaSKY zavřena lžice výška 2 mm | (SK) Odtlačkový abutment copaSKY zatvorená lyžica výška 2 mm |
| (HU) copaSKY mintázócsomk. zárt kanal magasság 2 mm | (RO) Bont de amprentare copaSKY lingura închisă înălțime 2 mm |
| (BG) Надстройка за снемане на отеч атьк copaSKY със затворена лъжица. | (EL) Κολοβωμα εκμύδου copaSKY κλειστός δίσκου, ύψους 2 mm |
| (SL) Abutment za izoblikovanje copaSKY zaprta žlica, višina 2 mm | (HR) copaSKY otisna nadogradnja, zatvorena žlica, visina 2 mm |
| (SV) copaSKY avtrycksforankring stängd sked höjd 2 mm | (LT) copaSKY atspaudo darymo abatmento uždaras šaukštas, aukštis 2 mm |
| (ET) copaSKY jäljendi abutment M suletud lusikas, kõrgus 2 mm | (LV) copaSKY slēgtas plātnes veidošanas baldiņš augstums 2 mm |
| (DA) copaSKY aftryk-abutment lukket ske høide 2 mm | |

Qty 1 REF COPAGL21 LOT 533657 17.10.2022

CE
0483

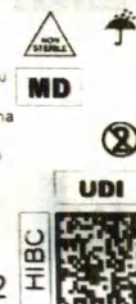

EBRM COPA GL 210/55/533657/16D20221017P

Фото 40.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент оттисковой для закрытой ложки



copaSKY Abformabutment geschlossener Löffel Höhe 3 mm

CE
0483

- | | |
|---|---|
| (EN) copaSKY impression abutment closed tray height 3 mm | (FR) copaSKY transfert porte- empreinte fermé hauteur 3 mm |
| (IT) copaSKY transfert da impronta cucchiaino per impronta a strappo alt. 3 | (ES) copaSKY aditamento de impresión cubeta cerrada altura 3 mm |
| (PT) Pilar de impressão copaSKY, moldeira fechada, altura 3 mm | (PL) Łącznik formujący copaSKY M zamknięta łyżka wyciskowa wysokość 3 |
| (CS) otiskový abutment copaSKY zavřená lžice výška 3 mm | (SK) Odtlačkový abutment copaSKY zatvorená lyžica výška 3 mm |
| (HU) copaSKY mintázócsont, zárt kanál, magasság: 3 mm | (RO) Bont de amprentare copaSKY lingură închisă înălțime 3 mm |
| (BG) Надстройка за снемане на отпеч атък copaSKY със затворена лъжица, | (EL) Κολοβωμα εκμωγιου copaSKY κλειστού δίσκου, ύψους 3 mm |
| (SL) Abutment za izoblikovanje copaSKY, zaprta žlica, višina 3 mm | (HR) copaSKY otisna nadogradnja, zatvorena žlica, visina 3 mm |
| (SV) copaSKY avtrycksförankring stängd sked höjd 3 mm | (LT) copaSKY atspaudo darymo abatmento uždaras šaukštas, aukštis 3 mm |
| (ET) copaSKY jäljendi abutment M, suletud lusikas, suletud lusikas, | (LV) copaSKY slēgtas plātnes veidošanas balsts augstums 3 mm |
| (DA) copaSKY aftryks-abutment lukket ske højde 3 mm | |

Qty 1 REF COPAGL31 LOT 537007 22.12.2022



MD



UDI

HIBC




+EBRMCOPL310/\$\$7537007/16D20221222H

- встроенный винт оттискного абатмента – 1 шт;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

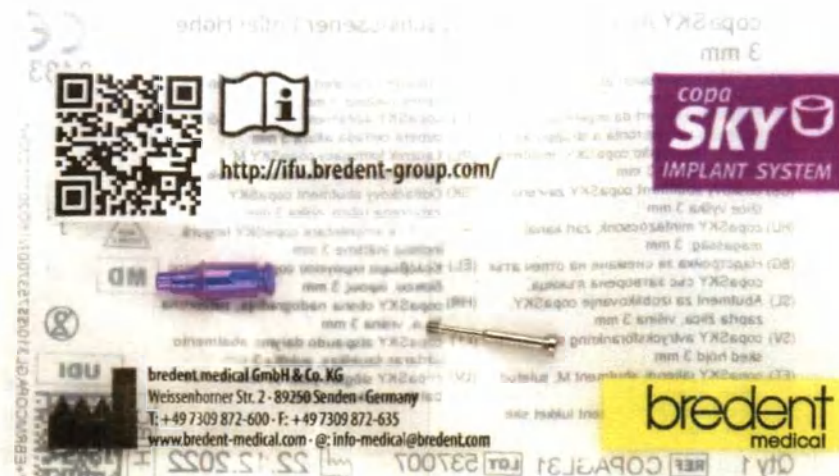

**copaSKY Abformabutment geschlossener Löffel Höhe
3 mm**

CE
0483

- | | |
|---|--|
| (EN) copaSKY impression abutment closed
tray height 3 mm | (FR) copaSKY transfert porte- empreinte
fermé hauteur 3 mm |
| (IT) copaSKY transfert da impronta
cucchiaio per impronta a strappo alt. 3 | (ES) copaSKY aditamento de impresión
cubeta cerrada altura 3 mm |
| (PT) Pilar de impressão copaSKY, moldeira
fechada, altura 3 mm | (PL) Łącznik formujący copaSKY M
zamknięta łyżka wyciskowa wysokość 3 |
| (CS) Otiskový abutment copaSKY zavřená
lžice výška 3 mm | (SK) Odtlačkový abutment copaSKY
zatvorená lyžica výška 3 mm |
| (HU) copaSKY mintázócsont, zárt kanal,
magasság: 3 mm | (RO) Bont de amprentare copaSKY lingură
închisă înălțime 3 mm |
| (BG) Надстройка за снемане на отпечатък
copaSKY със затворена лъжица. | (EL) Κολόβωμα απομύκνση copaSKY κλειστή
δίσκου, ύψους 3 mm |
| (SL) Abutment za izoblikovanje copaSKY,
zaprta žlica, višina 3 mm | (HR) copaSKY olisna nadogradnja, zatvorena
žlica, visina 3 mm |
| (SV) copaSKY avtrycksförankring stängd
sked höjd 3 mm | (LT) copaSKY atspaudo darymo abutmento
uždaras šaukštis, aukštis 3 mm |
| (ET) copaSKY jäljendi abutment M, suletud
lusikas, suletud lusikas. | (LV) copaSKY slēgtas plātnes veidošanas
balsts augstums 3 mm |
| (DA) copaSKY aftryk-abutment lukket ske
højde 3 mm | |

Qty 1 REF COPAGL31 LOT 537007 22.12.2022



4+EBRM COPAGL31 0483 537007 18D20221222

Фото 41.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент оттисковой для закрытой ложки



**copa
SKY**

**copaSKY uni.fit Scanabutment
intraoral / extraoral**

(EN) copaSKY uni.fit scan
abutment intraoral / extraoral

(FR) copaSKY uni.fit scan pilier
intra-oral / extra-oral

(IT) copaSKY uni.fit
Scan-Abutment intraorale /
extraorale

(ES) copaSKY uni.fit aditamento
para el escaneado intraoral /
extraoral

Qty 1


LOT 532863

REF COPAUSCI

bredent
medical

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhomer Str. 2 | 89250 Senden | Germany
T: +49 7309 872-600 | F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com | info-medical@bredent.com

CE
0483

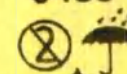

+EBRM COPAUSCI 0483 532863

- абатмент – 1 шт.;
- винт абатмента – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.



copaSKY Gingivaformer Höhe 2 mm

CE
0483

(EN) copaSKY gingiva former height 2 mm	(FR) copaSKY vis de cicatrisation hauteur 2 mm
(IT) copaSKY adattatore gengivale alt. 2 mm	(ES) copaSKY Formador de encia altura 2 mm
(PT) Adaptador gengival copaSKY, altura 2 mm	(PL) Gingivaformer copaSKY wysokość 2 mm
(CS) copaSKY tvarovač dásni výška 2 mm	(SK) Čiapka pre ďasná copaSKY výška 2 mm
(HU) copaSKY inyformázó, magasság: 2 mm	(RO) Formator gingival copaSKY înălțime 2 mm
(BG) Гингивален оформител copaSKY, височина 2 mm	(EL) Διαμορφωτής ούλων copaSKY, ύψους 2 mm
(SL) Gingiva former copaSKY višina 2 mm	(HR) copaSKY gingiva former, visina 2 mm
(SV) copaSKY gingivaformare höjd 2 mm	(LT) copaSKY dantenos formavimo priemonė, aukštis 2 mm
(ET) copaSKY Gingivaformer, kõrgus 2 mm	(LV) copaSKY smaganu veidotājs augstums 2 mm
(DA) copaSKY gingivaformer højde 2 mm	



UDI



EBRMCOPAGF220/557540837/16D020230317L

Qty 1 REF COPAGF22 LOT 540837 17.03.2023

43.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент заживляющий высота 2 мм, в составе:



<http://ifu.bredent-group.com/>






bredent medical GmbH & Co. KG
 Weissenhorner Str. 2 • 89250 Sönden • Germany
 T: +49 7309 872-600 • F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com • @: info-medical@bredent.com




REF COPAGF22 LOT 540837 17.03.2023

copaSKY Gingivaformer Höhe 2 mm

(EN) copaSKY gingiva former height 2 mm	(FR) copaSKY vis de cicatrization hauteur 2 mm
(IT) copaSKY adattatore gengivale alt. 2 mm	(ES) copaSKY Formador de encia altura 2 mm
(PT) Adaptador gengival copaSKY, altura 2 mm	(PL) Gingivaformer copaSKY wysokość 2 mm
(CS) copaSKY tvarovač dásní výška 2 mm	(SK) Čiapodča pre dásň copaSKY výška 2 mm
(HU) copaSKY inyformázó, magasság: 2 mm	(RO) Formator gingival copaSKY înălțime 2 mm
(BG) Гингивален оформител copaSKY, височина 2 mm	(EL) Διαμορφωτής ούλων copaSKY, ύψους 2 mm
(SL) Gingiva former copaSKY višina 2 mm	(HR) copaSKY gingiva former, visina 2 mm
(SV) copaSKY gingivaformare höjd 2 mm	(LT) copaSKY dantenos formavimo priemonė, aukštis 2 mm
(ET) copaSKY Gingivaformer, kõrgus 2 mm	(LV) copaSKY smaganu veidotājs augstums 2 mm
(DA) copaSKY gingivaformer højde 2 mm	

Qty 1 REF COPAGF22 LOT 540837 17.03.2023

CE 0483

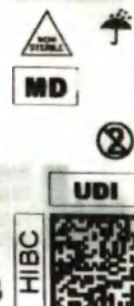

EBRMCOPAGF2205\$754083716D20230317L

Фото 43.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент заживляющий высота 2 мм. Вид в



copaSKY Gingivaformer Höhe 4 mm

CE
0483

(EN) copaSKY gingiva former height 4 mm	(FR) copaSKY vis de cicatrisation hauteur 4 mm
(IT) copaSKY adattatore gengivale alt 4 mm	(ES) copaSKY Formador de encia altura 4 mm
(PT) Adaptador gengival copaSKY, altura 4 mm	(PL) Gingivaformer copaSKY wysokość 4 mm
(CS) copaSKY tvarovač dásni výška 4 mm	(SK) Čiapka pre ďasná copaSKY výška 4 mm
(HU) copaSKY inyformázó, magasság: 4 mm	(RO) Formator gingival copaSKY înălțime 4 mm
(BG) Гингивален оформител copaSKY, височина 4 мм	(EL) Διαμορφωτής ούλων copaSKY, ύψους 4 mm
(SL) Gingiva former copaSKY višina 4 mm	(HR) copaSKY gingiva former, visina 4 mm
(SV) copaSKY gingivaformare höjd 4 mm	(LT) copaSKY dantenos formavimo priemonė, aukštis 4 mm
(ET) copaSKY Gingivaformer, kõrgus 4 mm	(LV) copaSKY smaganu veidotājs augstums 4 mm
(DA) copaSKY gingivaformer højde 4 mm	



UDI

HIBC



•EHRMCOPAGF340/\$\$7539512/16D20230228N*

Qty 1 REF COPAGF34 LOT 539512 28.02.2023



<http://ifu.bredent-group.com/>





bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhofer Str. 2 • 89250 Seiden • Germany
T: +49 7309 872-600 • F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com • info-medical@bredent.com



REF COPAGF34 LOT 539512

QTY 1

copaSKY Gingivaformer Höhe 4 mm

- | | |
|--|--|
| (EN) copaSKY gingiva former height 4 mm | (FR) copaSKY vis de cicatrization hauteur 4 mm |
| (IT) copaSKY adattatore gengivale alt. 4 mm | (ES) copaSKY Formador de encia altura 4 mm |
| (PT) Adaptador gengival copaSKY, altura 4 mm | (PL) Gingivaformer copaSKY wysokość 4 mm |
| (CS) copaSKY tvarovač dásní výška 4 mm | (SK) Čiapočka pre dásň copaSKY výška 4 mm |
| (HU) copaSKY inyformázó, magasság: 4 mm | (RO) Formator gingival copaSKY înălțime 4 mm |
| (BG) Гингивален оформител copaSKY, височина 4 мм | (EL) Δομορφωτής ούλων copaSKY, ύψους 4 mm |
| (SL) Gingiva former copaSKY višina 4 mm | (HR) copaSKY gingiva former, visina 4 mm |
| (SV) copaSKY gingivaformare höjd 4 mm | (LT) copaSKY dantenos formavimo priemonė, aukštis 4 mm |
| (ET) copaSKY Gingivaformer, kõrgus 4 mm | (LV) copaSKY smaganu veidošanas augstums 4 mm |
| (DA) copaSKY gingivaformer højde 4 mm | |

Qty 1 REF COPAGF34 LOT 539512 28.02.2023



*EBRMCOPAGF3403\$7539512/18020230228Y



copaSKY Gingivaformer Höhe 6 mm

(EN) copaSKY gingiva former height 6 mm	(FR) copaSKY vis de occlusion hauteur 6 mm
(IT) copaSKY adattatore gengivale alt. 6 mm	(ES) copaSKY Formador de encia altura 6 mm
(PT) Adaptador gengival copaSKY, altura 6 mm	(PL) Gingivaformer copaSKY wysokość 6 mm
(CS) copaSKY tvarovač dásni výška 6 mm	(SK) Čiaročka pre dásna copaSKY výška 6 mm
(HU) copaSKY inyformázó, magasság: 6 mm	(RO) Formator gingival copaSKY înălțime 6 mm
(BG) Гингивален оформител copaSKY височина 6 mm	(EL) Διαμορφωτής ούλων copaSKY, ύψους 6 mm
(SL) Gingiva former copaSKY višina 6 mm	(HR) copaSKY gingiva former, visina 6 mm
(SV) copaSKY gingivaformare höjd 6 mm	(LT) copaSKY dantenos formavimo priemonė, aukštis 6 mm
(ET) copaSKY Gingivaformer, kõrgus 6 mm	(LV) copaSKY smaganu veidotājs augstums 6 mm
(DA) copaSKY gingivaformer højde 6 mm	

CE
0483



MD



UDI


HIBC



*EBRMCOPAGF360/\$\$7532857/16D20220915W

Qty 1 REF COPAGF36 LOT 532857 15.09.2022

45.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент заживляющий высота 6 мм, в составе:

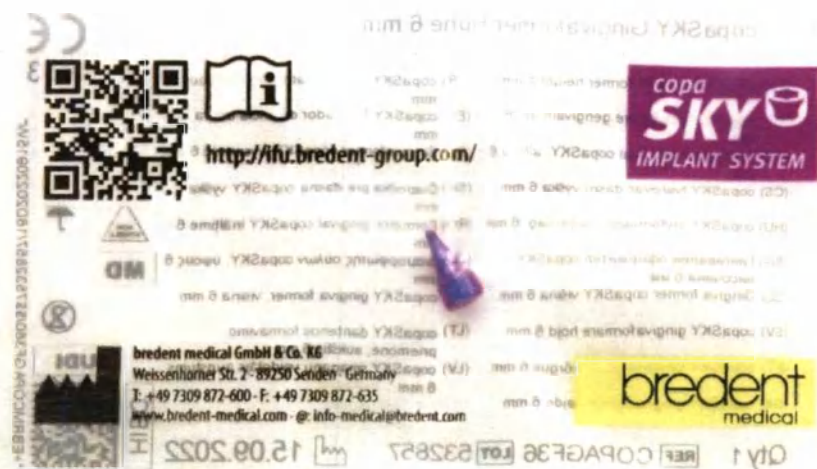

copaSKY Gingivaformer Höhe 6 mm

- | | |
|---|--|
| (EN) copaSKY gingiva former height 6 mm | (FR) copaSKY vis de occlusion hauteur 6 mm |
| (IT) copaSKY adattatore gengivale alt. 6 mm | (ES) copaSKY Formador de encia altura 6 mm |
| (PT) Adaptador gengival copaSKY, altura 6 mm | (PL) Gingivaformer copaSKY wysokość 6 mm |
| (CS) copaSKY tvarovač dásni výška 6 mm | (SK) Čiapka pre dásna copaSKY výška 6 mm |
| (HU) copaSKY inyfomázó, magasság: 6 mm | (RO) Formator gingival copaSKY înălțime 6 mm |
| (BG) Гингивален оформител copaSKY височина 6 mm | (EL) Διαμορφωτής ούλων copaSKY, ύψους 6 mm |
| (SL) Gingiva former copaSKY višina 6 mm | (HR) copaSKY gingiva former, visina 6 mm |
| (SV) copaSKY gingivaformare höjd 6 mm | (LT) copaSKY dantenos formavimo priemonė, aukštis 6 mm |
| (ET) copaSKY Gingivaformer, kõrgus 6 mm | (LV) copaSKY smaganu veidotājs augstums 6 mm |
| (DA) copaSKY gingivaformer højde 6 mm | |

Qty 1 REF COPAGF36 LOT 532857 15.09.2022

CE
0483



UDI



•EBRM/COPA GF360/\$37532857/16D20220615W

Фото 45.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY абатмент заживляющий высота 6 мм. Вид в

copaSKY elegance Titanbasis 0°

CE
0483

(EN) copaSKY elegance titanium base 0°	(FR) copaSKY elegance base en titane 0°
(IT) copaSKY elegance base in titanio 0°	(ES) copaSKY elegance base de titanio 0°
(PT) Base em titânio copaSKY elegance 0°	(PL) Podstawa tytanowa copaSKY elegance 0°
(CS) titánová báze copaSKY elegance 0°	(SK) Titánová základňa 0° copaSKY elegance
(HU) copaSKY elegance titán bázis 0°	(RO) copaSKY elegance Titanbasis 0°
(BG) Титанова основа copaSKY elegance 0°	(EL) Βάση τιτανίου 0° copaSKY elegance
(SL) Titanova osnova copaSKY elegance 0°	(HR) copaSKY elegance titanska baza 0°
(SV) copaSKY elegance titanbas 0°	(LT) copaSKY elegance 0° titano pagrindas
(ET) copaSKY elegance titaanalus 0°	(LV) copaSKY elegance titāna pamatne 0°
(DA) copaSKY elegance titaniumbasis 0°	



UDI

HIBC



..EBRMCOA ET BMD/SS7534289/16D202210241"

Qty 1 REF COPAETBM LOT 534289 24.10.2022

46.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY elegance базис титановый 0°0, в составе:

- винт абатмента – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

copaSKY elegance Titanium base 0°

CE 0483

  <http://ifu.bredent-group.com/>

copaSKY
IMPLANT SYSTEM

bredent
medical

bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhormer Str. 2 · 89250 Senden · Germany
T: +49 7309 872-600 · F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com · info-medical@bredent.com

UDI

REF COPAETBM LOT 534289


24.10.2022

copaSKY elegance Titanbasis 0°

(EN) copaSKY elegance titanium base 0°	(FR) copaSKY elegance base en titane 0°
(IT) copaSKY elegance base in titanio 0°	(ES) copaSKY elegance base de titanio 0°
(PT) Base em titânio copaSKY elegance 0°	(PL) Podstawa tytanowa copaSKY elegance 0°
(CS) titánová báze copaSKY elegance 0°	(SK) Titánová základňa 0° copaSKY elegance
(HU) copaSKY elegance titán bázis 0°	(RO) copaSKY elegance Titanbasis 0°
(BG) Титанова основа copaSKY elegance 0°	(EL) Βάση τιτανίου 0° copaSKY elegance
(SL) Titánova osnova copaSKY elegance 0°	(HR) copaSKY elegance titanska baza 0°
(SV) copaSKY elegance titanbas 0°	(LT) copaSKY elegance 0° titano pagrindas
(ET) copaSKY elegance titaanalus 0°	(LV) copaSKY elegance titāna pamatne 0°
(DA) copaSKY elegance titaniumbasis 0°	

Qty 1 REF COPAETBM LOT 534289 24.10.2022

CE
0483

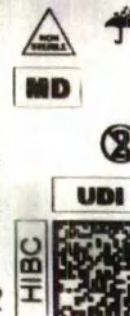

EBRM COPA ETBMD/534289/16D202210241

Фото 46.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY elegance базис титановый 0°. Вид в



copaSKY uni.fit Titanbasis Höhe 1,5mm

(EN) copaSKY uni.fit titanium base height 1,5mm	(FR) copaSKY uni.fit base en titane hauteur 1,5mm
(IT) copaSKY uni.fit base in titanio alt 1,5mm	(ES) copaSKY uni.fit base de titanio, altura 1,5mm
(PT) copaSKY uni.fit Base em titânio, altura 1,5mm	(PL) copaSKY uni.fit podstawa tytanowa wys 1,5mm
(CS) copaSKY uni.fit Titanová báze Výška 1,5mm	(SK) copaSKY uni.fit titánová základňa, výška 1,5mm
(HU) copaSKY uni.fit Titánbázis magasság 1,5mm	(RO) copaSKY uni.fit bază din titan înălțime 1,5mm
(BG) copaSKY uni.fit титанова основа, височина 1,5mm	(EL) copaSKY uni.fit Βάση τιτανίου, Ύψος 1,5mm
(SL) copaSKY uni.fit Titanova osnova, Višina 1,5mm	(HR) copaSKY uni.fit titanska baza, Visina 1,5mm
(SV) copaSKY uni.fit titanbas Höjd 1,5mm	(LT) copaSKY uni.fit titano pagrindas, Aukštis 1,5mm
(ET) copaSKY uni.fit titaanalus, Kõrgus 1,5mm	(LV) copaSKY uni.fit titāna pamatnes Augstums 1,5mm
(DA) copaSKY uni.fit titaniumbasis Højde 1,5mm	

Qty1 REF COPAUTB2 LOT 541561 24.03.2023

CE
0483



EBRMCOPAUTB205\$7541561/16D202303248



MD



UDI

HIBC



47.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY uni.fit базис титановый высота 1.5 мм⁰, в составе:

- винт абатмента – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

copaSKY uni.fit Titanbasis Höhe 1,5mm




<http://ifu.bredent-group.com/>




bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhomer Str. 2 - 89250 Senden - Germany
T: +49 7309 872-600 - F: +49 7309 872-635
www.bredent-medical.com - info-medical@bredent.com

copaSKY IMPLANT SYSTEM

bredent medical

ESOS.80.4S LOT 541561 COPAUTB2 24.03.2023

copaSKY uni.fit Titanbasis Höhe 1,5mm

(EN) copaSKY uni.fit titanium base height 1,5mm	(FR) copaSKY uni.fit base en titane hauteur 1,5mm
(IT) copaSKY uni.fit base in titanio alt 1,5mm	(ES) copaSKY uni.fit base de titanio, altura 1,5mm
(PT) copaSKY uni.fit Base em titânio, altura 1,5mm	(PL) copaSKY uni.fit podstawa tytanowa wys 1,5mm
(CS) copaSKY uni.fit Titanová báze Výška 1,5mm	(SK) copaSKY uni.fit titánová základňa, výška 1,5mm
(HU) copaSKY uni.fit Titanbázis magasság 1,5mm	(RO) copaSKY uni.fit bază din titan înălțime 1,5mm
(BG) copaSKY uni.fit титанова основа, височина 1,5mm	(EL) copaSKY uni.fit βάση τιτανίου, Ύψος 1,5mm
(SL) copaSKY uni.fit Titanova osnova, Višina 1,5mm	(HR) copaSKY uni.fit titanska baza, Visina 1,5mm
(SV) copaSKY uni.fit titanbas Höjd 1,5mm	(LT) copaSKY uni.fit titano pagrindas, Aukštis 1,5mm
(ET) copaSKY uni.fit titaanalus, Kõrgus 1,5mm	(LV) copaSKY uni.fit titāna pamatnes Augstums 1,5mm
(DA) copaSKY uni.fit titaniumbasis Højde 1,5mm	

Qty 1 REF COPAUTB2 LOT 541561 24.03.2023

CE 0483



MD



UDI

HIBC



EBRM COPAUTB201561/1602020303248

Фото 47.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY uni.fit базис титановый высота 1.5 мм. Вид в



copaSKY uni.fit Titanbasis Höhe 3mm

(EN) copaSKY uni.fit titanium base height 3mm	(FR) copaSKY uni.fit base en titane hauteur 3mm
(IT) copaSKY uni.fit base in titanio alt. 3mm	(ES) copaSKY uni.fit base de titanio, altura 3mm
(PT) copaSKY uni.fit Base em titânio, altura 3mm	(PL) copaSKY uni.fit podstawa tytanowa wys. 3mm
(CS) copaSKY uni.fit Titanová báze Výška 3mm	(SK) copaSKY uni.fit titánová základňa, výška 3mm
(HU) copaSKY uni.fit Titánbázis magasság: 3mm	(RO) copaSKY uni.fit bază din titan înălțime 3mm
(BG) copaSKY uni.fit титанова основа, височина 3mm	(EL) copaSKY uni.fit Βάση τιτανίου, Ύψος 3mm
(SL) copaSKY uni.fit Titanova osnova, Višina 3mm	(HR) copaSKY uni.fit titanska baza, Visina 3mm
(SV) copaSKY uni.fit titanbas Höjd 3mm	(LT) copaSKY uni.fit titano pagrindas, Aukštis 3mm
(ET) copaSKY uni.fit titaanalus, Kõrgus 3mm	(LV) copaSKY uni.fit titāna pamatnes Augstums 3mm
(DA) copaSKY uni.fit titaniumbasis Højde 3mm	

CE
0483



MD



UDI

HIBC



EBRMCOPAUTB30/\$\$7534723/16D202211038


Qty 1 REF COPAUTB3 LOT 534723 03.11.2022

48.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY uni.fit базис титановый высота 3 мм⁰, в составе:

- винт абатмента – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

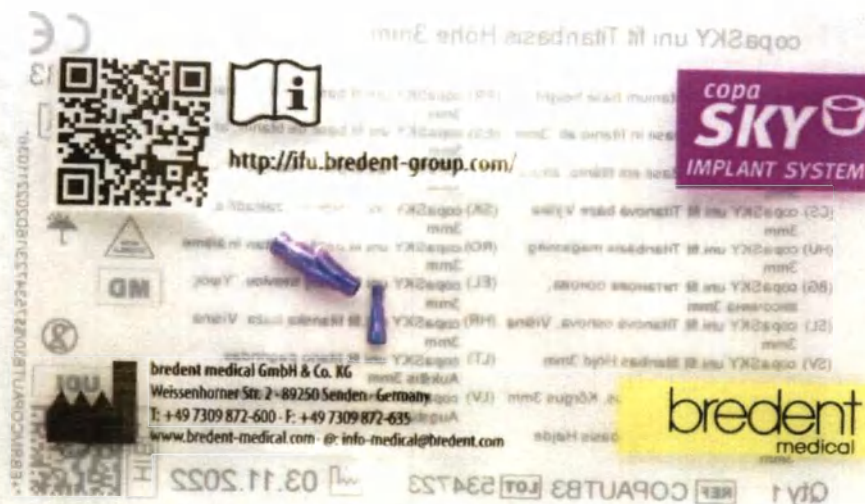

copaSKY uni.fit Titanbasis Höhe 3mm

(EN) copaSKY uni.fit titanium base height 3mm	(FR) copaSKY uni.fit base en titane hauteur 3mm
(IT) copaSKY uni.fit base in titanio alt. 3mm	(ES) copaSKY uni.fit base de titanio, altura 3mm
(PT) copaSKY uni.fit Base em titânio, altura 3mm	(PL) copaSKY uni.fit podstawa tytanowa wys. 3mm
(CS) copaSKY uni.fit Titanová báze Výška 3mm	(SK) copaSKY uni.fit titánová základňa, výška 3mm
(HU) copaSKY uni.fit Titánbázis magasság: 3mm	(RO) copaSKY uni.fit bază din titan înălțime 3mm
(BG) copaSKY uni.fit титанова основа, височина 3mm	(EL) copaSKY uni.fit βάση τιτανίου, Ύψος 3mm
(SL) copaSKY uni.fit Titanova osnova, Višina 3mm	(HR) copaSKY uni.fit titanska baza, Visina 3mm
(SV) copaSKY uni.fit titanbas Höjd 3mm	(LT) copaSKY uni.fit titano pagrindas, Aukštis 3mm
(ET) copaSKY uni.fit titaanalus, Kõrgus 3mm	(LV) copaSKY uni.fit titāna pamatnes Augstums 3mm
(DA) copaSKY uni.fit titaniumbasis Højde 3mm	

Qty 1 REF COPAUTB3 LOT 534723 03.11.2022

CE
0483



••EERM COPAUTB30/\$7534723/16D202211038••



UDI

HIBC



Фото 48.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY uni.fit базис титановый высота 3 мм. Вид в



copaSKY Titanbasis L für CEREC ® Höhe 1,5 mm

CE
0483

- | | |
|--|--|
| (EN) copaSKY titanium base L for CEREC®
height 1.5 mm | (FR) copaSKY base de titane L pour CEREC
® hauteur 1,5 mm |
| (IT) copaSKY base in titanio L per CEREC®
alt. 1,5 mm | (ES) copaSKY base de titanio L para
CEREC® altura 1,5 mm |
| (PT) Base em titânio copaSKY L para
CEREC® altura 1,5 mm | (PL) Podstawa tytanowa copaSKY L dla
CEREC® wysokość 1,5 mm |
| (CS) titanová báze copaSKY L pro CEREC®
výška 1,5 mm | (SK) Titánová základňa L copaSKY pre
CEREC® výška 1,5 mm |
| (HU) copaSKY titán bázis L CEREC®-hez
magasság: 1,5 mm | (RO) copaSKY Titanbasis L pentru CEREC
înălțime 1,5 mm |
| (BG) Титанова основа copaSKY L за
CEREC®, височина 1,5 мм | (EL) Βάση τιτανίου L copaSKY για CEREC®
ύψους 1,5 mm |
| (SL) Titanova osnova copaSKY L za
CEREC® višina 1,5 mm | (HR) copaSKY titanska baza L za CEREC®
visina 1,5 mm |
| (SV) copaSKY titanbas L för CEREC® höjd
1,5 mm | (LT) CEREC® copaSKY L titano pagrindas
aukštis 1,5 mm |
| (ET) copaSKY titaanalus L CEREC®-ile
kõrgus 1,5 mm | (LV) copaSKY titāna pamatine L CEREC®
augstums 1,5 mm |
| (DA) copaSKY titaniumbasis L til CEREC®
højde 1,5 mm | |

Qty 1 REF COPCTBL2 LOT 532542 15.09.2022



MD



UDI




EBRM COPCTBL20/\$37532542/16D20209155

- винт абатмента – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

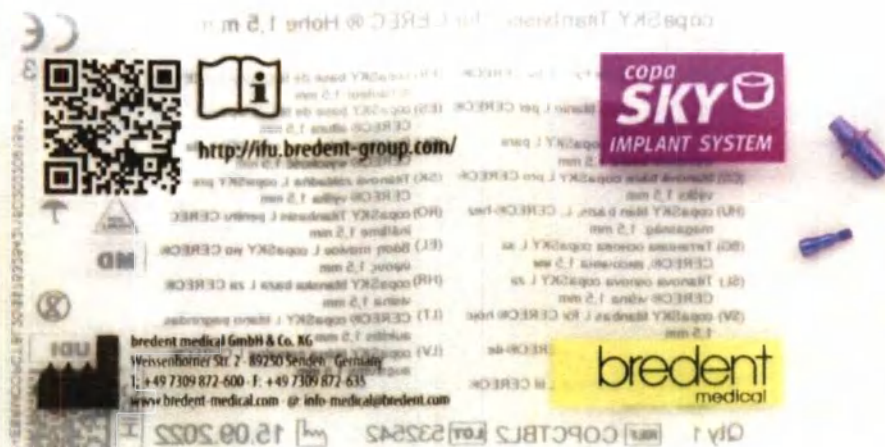

copaSKY Titanbasis L für CEREC ® Höhe 1,5 mm

CE
0483

- | | |
|---|--|
| (EN) copaSKY titanium base L for CEREC®
height 1.5 mm | (FR) copaSKY base de titane L pour CEREC
® hauteur 1,5 mm |
| (IT) copaSKY base in titanio L per CEREC®
alt. 1,5 mm | (ES) copaSKY base de titanio L para
CEREC® altura 1,5 mm |
| (PT) Base em titânio copaSKY L para
CEREC® altura 1,5 mm | (PL) Podstawa tytanowa copaSKY L dla
CEREC® wysokość 1,5 mm |
| (CS) titánová báze copaSKY L pro CEREC®
výška 1,5 mm | (SK) Titánová základňa L copaSKY pre
CEREC® výška 1,5 mm |
| (HU) copaSKY titán bázis L CEREC®-hez
magasság 1,5 mm | (RO) copaSKY Titanbasis L pentru CEREC
înălțime 1,5 mm |
| (BG) Титанова основа copaSKY L за
CEREC® височина 1,5 mm | (EL) Βάση ττανίου L copaSKY για CEREC®
ύψους 1,5 mm |
| (SL) Titanova osnova copaSKY L za
CEREC® višina 1,5 mm | (HR) copaSKY titanska baza L za CEREC®
visina 1,5 mm |
| (SV) copaSKY titanbas L för CEREC® höjd
1,5 mm | (LT) CEREC® copaSKY L titano pagrindas.
aukštis 1,5 mm |
| (ET) copaSKY titaanalus L CEREC®-de
kõrgus 1,5 mm | (LV) copaSKY titāna pamatine L CEREC®
augstums 1,5 mm |
| (DA) copaSKY titaniumbase L til CEREC®
højde 1,5 mm | |

Qty 1 REF COPCTBL2 LOT 532542 15.09.2022

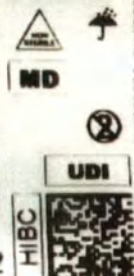


Фото 49.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY базис титановый L для CEREC высота 1.5 мм.



copaSKY Titanbasis L für CEREC® Höhe 3 mm

CE
0483

- | | |
|--|--|
| (EN) copaSKY titanium base L for CEREC®
height 3 mm | (FR) copaSKY base de titane L pour
CEREC® hauteur 3 mm |
| (IT) copaSKY base in titanio L per CEREC®
alt. 3 mm | (ES) copaSKY base de titanio L para
CEREC® altura 3 mm |
| (PT) Base em titânio copaSKY L para
CEREC® altura 3 mm | (PL) Podstawa tytanowa copaSKY L dla
CEREC® wysokość 3 mm |
| (CS) titanová báze copaSKY L pro CEREC®
výška 3 mm | (SK) Titánová základňa L copaSKY pre
CEREC® výška 3 mm |
| (HU) copaSKY titán bázis L CEREC®-hez
magasság: 3 mm | (RO) copaSKY Titanbasis L pentru CEREC
înălțime 3 mm |
| (BG) Титанова основа copaSKY L за
CEREC®, височина 3 mm | (EL) Βασή τιτανίου L copaSKY για CEREC®
ύψους 3 mm |
| (SL) Titanova osnova copaSKY L za
CEREC®, višina 3 mm | (HR) copaSKY titanska baza L za CEREC®
visina 3 mm |
| (SV) copaSKY titanbas L för CEREC® höjd 3
mm | (LT) CEREC® copaSKY L titano pagrindas
aukštis 3 mm |
| (ET) copaSKY titaanalus L CEREC®-ile
kõrgus 3 mm | (LV) copaSKY titāna pamatine L CEREC®
augstums 3 mm |
| (DA) copaSKY titaniumbasis L til CEREC®
højde 3 mm | |



MD



UDI

HIBC



EBRM COPCTBL30/\$532864/16D2020921

Qty 1 REF COPCTBL3 LOT 532864 21.09.2022

50.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY базис титановый L для CEREC высота 3 мм, в составе:

- винт абатмента – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.



copaSKY Titanbasis L für CEREC ® Höhe 3 mm

(EN) copaSKY titanium base L for CEREC® height 3 mm	(FR) copaSKY base de titane L pour CEREC® hauteur 3 mm
(IT) copaSKY base in titanio L per CEREC® alt. 3 mm	(ES) copaSKY base de titanio L para CEREC® altura 3 mm
(PT) Base em titânio copaSKY L para CEREC® altura 3 mm	(PL) Podstawa tytanowa copaSKY L dla CEREC® wysokość 3 mm
(CS) titanová báze copaSKY L pro CEREC® výška 3 mm	(SK) Titanová základňa L copaSKY pre CEREC® výška 3 mm
(HU) copaSKY titán bázis L CEREC®-hez magasság 3 mm	(RO) copaSKY Titanbasis L pentru CEREC înălțime 3 mm
(BG) Титанова основа copaSKY L за CEREC® височина 3 mm	(EL) Βάση τιτανίου L copaSKY για CEREC® ύψους 3 mm
(SL) Titanova osnova copaSKY L za CEREC® višina 3 mm	(HR) copaSKY titanska baza L za CEREC® visina 3 mm
(SV) copaSKY titanbas L för CEREC® höjd 3 mm	(LT) CEREC® copaSKY L titano pagrindas aukštis 3 mm
(ET) copaSKY titaanalus L CEREC®-le kõrgus 3 mm	(LV) copaSKY titāna pamatine L CEREC® augstums 3 mm
(DA) copaSKY titaniumbasis L til CEREC® højde 3 mm	

Qty 1 REF COPCTBL3 LOT 532864 21.09.2022

CE
0483



MD



UDI



1*EBRUCOPCTBL30/557532864/16D02020921A*

Фото 50.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями, вариант исполнения: copaSKY базис титановый L для CEREC высота 3 мм.

Вил в индивидуальной упаковке



copaSKY Abutmentschraube M1,6

CE
0483

(EN) copaSKY abutment screw M1,6	(FR) copaSKY vis de pilier M1,6
(IT) copaSKY vite per abutment M1,6	(ES) copaSKY tornillo de abutment M1,6
(PT) Parafuso de pilar copaSKY M1,6	(PL) Śruba łącznika copaSKY M1,6
(CS) šroub pro abutment copaSKY M1,6	(SK) Abutmentová skrutka M1,6 copaSKY
(HU) copaSKY oszloksavar M1,6	(RO) Șurub de pont copaSKY M1,6
(BG) Винт за надстройка copaSKY M1,6	(EL) Βίδα «ολοβωματος» copaSKY M1,6
(SL) Vijak za abutment copaSKY M1,6	(HR) copaSKY vijak nadogradnje M1,6
(SV) copaSKY förankringsskruv M1,6	(LT) copaSKY abatmento varžtas M1,6
(ET) copaSKY abutmendi kruvi M1,6	(LV) copaSKY balsta skrūve M1,6
(DA) copaSKY ekspansionsskrue M1,6	



MD



UDI


HIBC



EBRMCOPA SM1604\$7533250/16D20220929

Qty 6 REF COPASM16 LOT 533250 29.09.2022

51.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями. Принадлежности: copaSKY винт M1.6 абатмента, в составе:

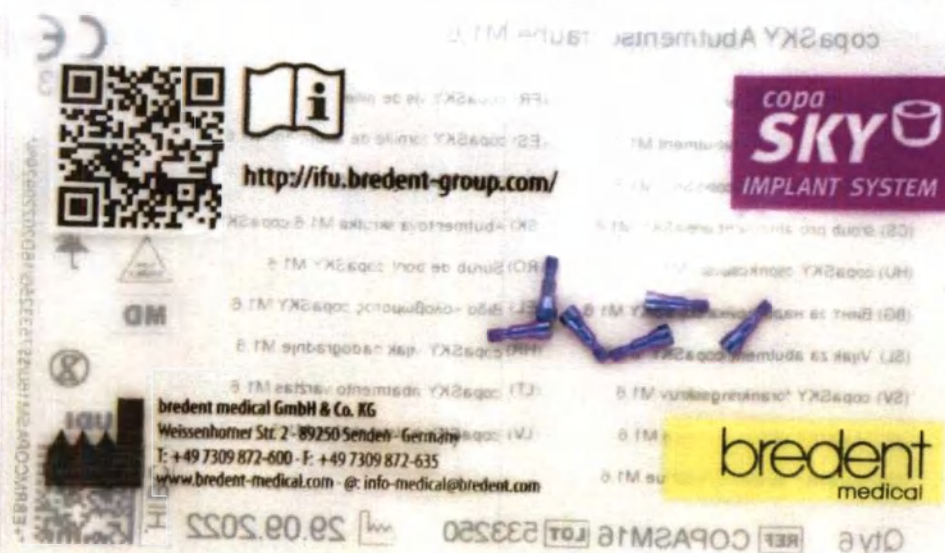

copaSKY Abutmentschraube M1.6

(EN) copaSKY abutment screw M1.6	(FR) copaSKY vis de pilier M1.6
(IT) copaSKY vite per abutment M1.6	(ES) copaSKY tornillo de abutment M1.6
(PT) Parafuso de pilar copaSKY M1.6	(PL) Śruba łącznika copaSKY M1.6
(CS) šroub pro abutment copaSKY M1.6	(SK) Abutmentová skrutka M1.6 copaSKY
(HU) copaSKY csavar M1.6	(RO) Surub de boni copaSKY M1.6
(BG) Винт за надстройка copaSKY M1.6	(EL) Βίδα ολοβρωτοχ copaSKY M1.6
(SL) Vijak za abutment copaSKY M1.6	(HR) copaSKY vijak nadogradnje M1.6
(SV) copaSKY förankningsskruv M1.6	(LT) copaSKY abatmento varžtas M1.6
(ET) copaSKY abutmendi kruvi M1.6	(LV) copaSKY balsta skrūve M1.6
(DA) copaSKY ekspansionsskrue M1.6	

Qty6 REF COPASM16 LOT 533250 29.09.2022

CE
0483



MD



UDI

HIBC



EBRM COPASM16/US\$7533250/16D20220829%

Фото 51.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями. Принадлежности: copaSKY винт M1.6 абатмента, в составе:



copaSKY Abutmentschraube M1,6

(EN) copaSKY abutment screw M1,6	(FR) copaSKY vis de pilier M1,6
(IT) copaSKY vite per abutment M1,6	(ES) copaSKY tornillo de abutment M1,6
(PT) Parafuso de pilar copaSKY M1,6	(PL) Śruba łącznika copaSKY M1,6
(CS) šroub pro abutment copaSKY M1,6	(SK) Abutmentová skrutka M1,6 copaSKY
(HU) copaSKY csomkcsavar, M1,6	(RO) Șurub de bont copaSKY M1,6
(BG) Винт за надстройка copaSKY M1,6	(EL) Βίδα κολωβώματος copaSKY M1,6
(SL) Vijak za abutment copaSKY M1,6	(HR) copaSKY vijak nadogradnje M1,6
(SV) copaSKY förankringsskruv M1,6	(LT) copaSKY abatmento varžtas M1,6
(ET) copaSKY abutmendi kruvi M1,6	(LV) copaSKY balsta skrūve M1,6
(DA) copaSKY ekspansionsskrue M1,6	

CE
0483



MD



UDI


HIBC



+EBRMCOPA1M160/\$\$7537004/16D202212223

Qty 1 **REF** COPA1M16 **LOT** 537004 22.12.2022

52.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями. Принадлежности: copaSKY винт M1.6 абатмента, в составе:

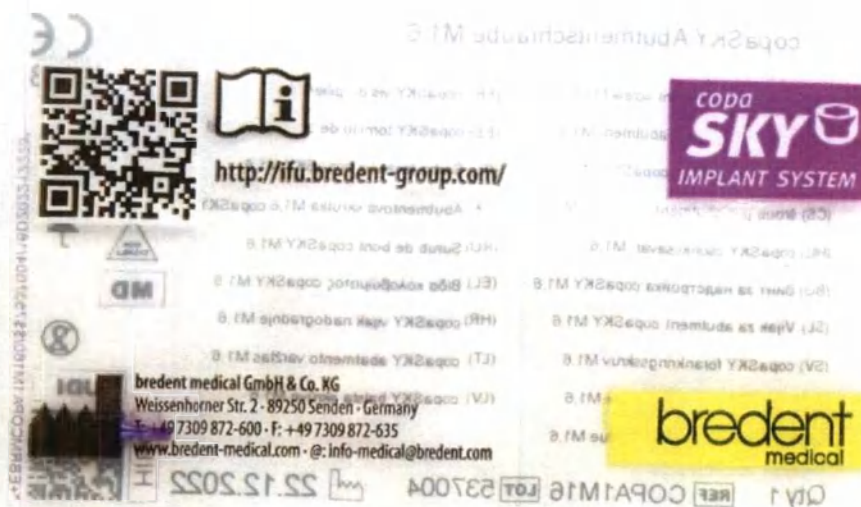

copaSKY Abutmentschraube M1,6

(EN) copaSKY abutment screw M1,6	(FR) copaSKY vis de pilier M1,6
(IT) copaSKY vite per abutment M1,6	(ES) copaSKY tornillo de abutment M1,6
(PT) Parafuso de pilar copaSKY M1,6	(PL) Śruba łącznika copaSKY M1,6
(CS) šroub pro abutment copaSKY M1,6	(SK) Abutmentová skrutka M1,6 copaSKY
(HU) copaSKY csomcsavar, M1,6	(RO) Șurub de bont copaSKY M1,6
(BG) Винт за надстройка copaSKY M1,6	(EL) Βίδα κολοβώματος copaSKY M1,6
(SL) Vijak za abutment copaSKY M1,6	(HR) copaSKY vijak nadogradnje M1,6
(SV) copaSKY forankringskruv M1,6	(LT) copaSKY abatmento varžtas M1,6
(ET) copaSKY abutmendi kruvi M1,6	(LV) copaSKY balsta skrūve M1,6
(DA) copaSKY ekspansionsskrue M1,6	

Qty 1 REF COPA1M16 LOT 537004 22.12.2022

CE
0483



UDI

HIBC



••EBRMCOPA 1M160/\$537004/16D20221223*



copaSKY Laborschraube M1,6

(EN) copaSKY laboratory screw M1,6	(FR) copaSKY vis pour laboratoire M1,6
(IT) copaSKY vite da laboratorio M1,6	(ES) copaSKY tornillo de laboratorio M1,6
(PT) Parafuso de laboratório copaSKY M1,6	(PL) Śruba laboratoryjna copaSKY M1,6
(CS) laboratorní šroub copaSKY M1,6	(SK) Laboratorná skrutka M1,6 copaSKY
(HU) copaSKY laboratórium csavar M1,6	(RO) Șurub de laborator copaSKY M1,6
(BG) Лабораторен винт copaSKY M1,6	(EL) Εργαστηριακή βίδα copaSKY M1,6
(SL) Laboratorijski vijak copaSKY M1,6	(HR) copaSKY laboratorijski vijak M1,6
(SV) copaSKY labbskruv M1,6	(LT) copaSKY laboratorinis varžtas M1,6
(ET) copaSKY laborikruvi M1,6	(LV) copaSKY laboratorijas skrūve M1,6
(DA) copaSKY laborationeskrue M1,6	



HIBC



EBRM COPALM160/\$533868/16D20221010W


Qty 10 REF COPALM16 LOT 533868 10.10.2022

53.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями. Принадлежности: copaSKY винт M1,6 лабораторный в составе:

- винт лабораторный - 10 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- инструкция по применению - 1 шт. Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.

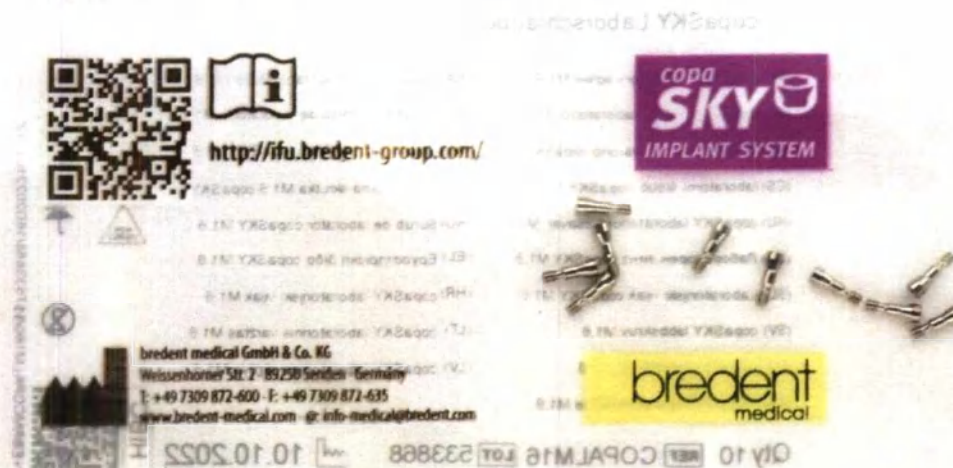

copaSKY Laborschraube M1.6

(EN) copaSKY laboratory screw M1.6	(FR) copaSKY vis pour laboratoire M1.6
(IT) copaSKY vite da laboratorio M1.6	(ES) copaSKY tornillo de laboratorio M1.6
(PT) Parafuso de laboratório copaSKY M1.6	(PL) Śruba laboratoryjna copaSKY M1.6
(CS) laboratorní šroub copaSKY M1.6	(SK) Laboratorná skrutka M1.6 copaSKY
(HU) copaSKY laboratórium csavar M1.6	(RO) Șurub de laborator copaSKY M1.6
(BG) Лабораторен винт copaSKY M1.6	(EL) Εργαστηριακή βίδα copaSKY M1.6
(SL) Laboratorijski vijak copaSKY M1.6	(HR) copaSKY laboratorijski vijak M1.6
(SV) copaSKY labbskruv M1.6	(LT) copaSKY laboratorinis varžtas M1.6
(ET) copaSKY laborikruvi M1.6	(LV) copaSKY laboratorijas skrūve M1.6
(DA) copaSKY laborationskrue M1.6	

Qty 10 REF COPALM16 LOT 533868 10.10.2022



Фото 53.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями. Принадлежности: copaSKY винт M1.6 лабораторный в составе:



copaSKY Implantatanalog

(EN) copaSKY implant analogue	(FR) copaSKY implant analogue
(IT) copaSKY analogo implantare	(ES) copaSKY analogo del implante
(PT) Analogo do implante copaSKY	(PL) Analog implantu copaSKY
(CS) copaSKY analog implantatu	(SK) Analog implantatu copaSKY
(HU) copaSKY implantátum analog	(RO) Analog de implant copaSKY
(BG) Аналог за имплант copaSKY	(EL) Αναλογό εμφυτεύματος copaSKY
(SL) Analog vsadka copaSKY	(HR) copaSKY laboratorijski implantat
(SV) copaSKY implantatanalog	(LT) copaSKY implanto analogas
(ET) copaSKY implantaadi analoog	(LV) copaSKY implanta analogs
(DA) copaSKY implantatanalog	



HIBC



+EBRM/COPA IA 500/\$\$7533631/160202210136*

Qty 1 REF COPAIA50 LOT 533631 13.10.2022

54.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями. Принадлежности: copaSKY аналог имплантата, в составе:
- аналог имплантата – 1 шт.;



copaSKY Implantatanalog

(EN) copaSKY implant analogue	(FR) copaSKY implant analogue
(IT) copaSKY analogo implantare	(ES) copaSKY analogo del implante
(PT) Analogo do implante copaSKY	(PL) Analog implantu copaSKY
(CS) copaSKY analog implantátu	(SK) Analog implantátu copaSKY
(HU) copaSKY implantatumanalog	(RO) Analog de implant copaSKY
(BG) Аналог за имплант copaSKY	(EL) Αναλόγο εμφυτευματος copaSKY
(SL) Analog vsadka copaSKY	(HR) copaSKY laboratorijski implantat
(SV) copaSKY implantatanalog	(LT) copaSKY implanta analogas
(ET) copaSKY implantaadi analoog	(LV) copaSKY implanta analogs
(DA) copaSKY implantatanalog	

Qty 1 REF COPAIA50 LOT 533631 13.10.2022

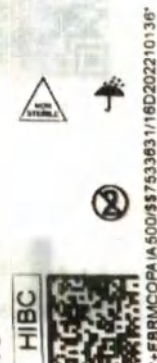


Фото 54.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями. Принадлежности: copaSKY аналог имплантата. Вид в индивидуальной



copaSKY Implantatanalog 3D Print

(EN) copaSKY Implantatanalog 3D Print	(FR) copaSKY Implantatanalog 3D Print
(IT) copaSKY Implantatanalog 3D Print	(ES) copaSKY Implantatanalog 3D Print
(PT) copaSKY Análogo de implante 3D Print	(PL) copaSKY Analog implantu 3D Print
(CS) copaSKY Analog implantátu 3D Print	(SK) copaSKY Análogo implantátu 3D Print
(HU) copaSKY implantátumanalóg 3D Print	(RO) copaSKY Analog de implant 3D Print
(BG) copaSKY Аналог на имплант 3D Print	(EL) copaSKY Ανάλογο εμφυτεύματος 3D Print
(SL) copaSKY Analog vsadka 3D Print	(HR) copaSKY Laboratorijski implantat 3D Print
(SV) copaSKY Implantatanalog 3D Print	(LT) copaSKY Implantu analogas 3D Print
(ET) copaSKY Implaantadi analoog 3D Print	(LV) copaSKY Implanča analogs 3D Print
(DA) copaSKY Implantatanalog 3D Print	



HIBC



EBRM/COPDIA500/\$\$7536157/16D20221130F

Qty 1 **REF** copdIA50 **LOT** 536157 30.11.2022

55.1. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями. Принадлежности: copaSKY аналог имплантата для 3D печати, в составе:
- аналог имплантата для 3D печати – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

Общий вид изделия и вид индивидуальной упаковки.



copaSKY Implantatanalog 3D Print

(EN) copaSKY Implantatanalog 3D Print	(FR) copaSKY Implantatanalog 3D Print
(IT) copaSKY Implantatanalog 3D Print	(ES) copaSKY Implantatanalog 3D Print
(PT) copaSKY Análogo de implante 3D Print	(PL) copaSKY Analog implantu 3D Print
(CS) copaSKY Analog implantátu 3D Print	(SK) copaSKY Análog implantátu 3D Print
(HU) copaSKY implantátumanalóg 3D Print	(RO) copaSKY Analog de implant 3D Print
(BG) copaSKY Аналог на имплант 3D Print	(EL) copaSKY Αναλόγο εμφυτεύματος 3D Print
(SL) copaSKY Analog vsadka 3D Print	(HR) copaSKY Laboratorijski implantat 3D Print
(SV) copaSKY Implantatanalog 3D Print	(LT) copaSKY Implanto analogas 3D Print
(ET) copaSKY implantaadi analoog 3D Print	(LV) copaSKY implanta analogs 3D Print
(DA) copaSKY Implantatanalog 3D Print	

Qty 1 REF copdIA50 LOT 536157 30.11.2022



Фото 55.2. Имплантаты стоматологические copaSKY с принадлежностями. Принадлежности: copaSKY аналог имплантата для 3D печати. Вид в

индивидуальной упаковке

Макет стикера с маркировкой на русском языке для импланта

Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями	
Вариант исполнения: XXXXX Артикул: XXXXX Комплектация: XXX	
 _____  _____  _____	   
	 
Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АРКОМ» Адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Малая Охта, ул. Таллинская, д. 7, литера А, помещ. 7Н, офис 3Б	
 bredent medical GmbH & Co. KG Weissenhorner Strasse 2, 89250 Senden, Germany	№ РУ _____ от _____

Макет стикера с маркировкой на русском языке для абатментов и принадлежностей.

Имплантаты стоматологические сораSKY с принадлежностями	
Вариант исполнения: XXXXX Артикул: XXXXX Комплектация: XXX	
 _____  _____  _____	   
	  
Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АРКОМ» Адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Малая Охта, ул. Таллинская, д. 7, литера А, помещ. 7Н, офис 3Б	
 bredent medical GmbH & Co. KG Weissenhorner Strasse 2, 89250 Senden, Germany	№ РУ _____ от _____

В настоящем документе
прошито
173 (Сто семьдесят три) листа
Ген. директор ООО «АРКОМ»

Селезнев Р.Ю.

