

ОКПД 2
29.10.59.170

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ДжиСиМед»

Махотин

М.А. Махотин

«15» марта 2024 г.



**Мобильный лечебно-профилактический модуль
МЛПМ «Диагностика»
по ТУ 29.10.59-017-86567070-2023**

Руководство по эксплуатации
КД 86567070.941149.001-01



ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2 ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ	5
3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	10
4 ПОДГОТОВКА МОДУЛЯ К РАБОТЕ И ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ	12
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	19
6 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	21
7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	22
8 РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ (МАРКИРОВКИ) НА МОДУЛЕ	71
9 УТИЛИЗАЦИЯ	73
10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	74
11 ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ	75
12 ПРИЛОЖЕНИЕ 1	76
13 ПРИЛОЖЕНИЕ 2	86
14 ПРИЛОЖЕНИЕ 3	134

					КД 86567070.941149.001-01		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.		Хилькевич С.В.	<i>Хилькевич</i>	15.03.24.	Мобильный лечебно-профилактический модуль МЛПМ «Диагностика» РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Провер.		Юдина А.П.	<i>Юдина</i>	15.03.24.			
Н. Контр.		Илинзеер А.С.	<i>Илинзеер</i>	15.03.24.			
					Лит.	Лист	Листов
						2	138
					ООО «ДжиСиМед»		

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее «Руководство по эксплуатации» является совмещенным документом с техническим описанием (далее – Руководство). Паспорт является отдельным документом на каждый Модуль.

1.1 Наименование медицинского изделия

Мобильный лечебно-профилактический модуль МЛПМ «Диагностика» по ТУ 29.10.59-017-86567070-2023 (далее – Модуль, МЛПМ, Комплекс) (см. Приложение 2).

1.2 Обозначение технических условий

ТУ 29.10.59-017-86567070-2023

1.3 Обозначение варианта исполнения

Вариант исполнения 1 - Мобильный лечебно-профилактический модуль МЛПМ «Диагностика» по ТУ 29.10.59-017-86567070-2023, вариант исполнения 1, на базе БТС 57561Z, 57550Z, 57552Z, 57530Z, 47195Z, 47193Z, 87528Z, 87551Z, 87578Z.

Вариант исполнения 2 - Мобильный лечебно-профилактический модуль МЛПМ «Диагностика» по ТУ 29.10.59-017-86567070-2023, вариант исполнения 2, на базе БТС 57561Z, 57550Z, 57552Z, 57530Z, 47195Z, 47193Z, 87528Z, 87551Z, 87578Z.

Вариант исполнения 3 - Мобильный лечебно-профилактический модуль МЛПМ «Диагностика» по ТУ 29.10.59-017-86567070-2023, вариант исполнения 3, на базе БТС 57561Z, 57550Z, 57552Z, 57530Z, 47195Z, 47193Z, 87528Z, 87551Z, 87578Z.

1.4 Назначение медицинского изделия

Модуль предназначен для оказания диагностической, терапевтической и хирургической помощи населению в условиях отсутствия стационарных клиник.

1.5 Потенциальные потребители

Медицинский персонал, предварительно прошедший обучение работе с Модулем, ознакомившиеся с руководством по эксплуатации Модуля и руководствами по эксплуатации и инструкциями по применению на медицинские изделия, идущие в комплектности Модуля.

1.6 Условия применения

Модуль используется по месту временной дислокации и не предназначен для применения в медицинских целях при перевозках или перемещении.

1.7 Область применения

Проведение медицинских диагностических, профилактических осмотров, оказание терапевтической и/или хирургической медицинской помощи.

1.8 Условия окружающей среды при применении

Эксплуатация Модуля допускается при температуре от минус 40 до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха до 100 % при плюс 25 °С, запыленности воздуха до 0,1 г/м³.

86567070.941149.001-01

Лист

3

1.9 Перечень показаний к применению, противопоказаний, возможных побочных действий

Показания к применению: необходимость проведения медицинских диагностических, профилактических осмотров, оказание терапевтической и/или хирургической медицинской помощи населению труднодоступных и удаленных районов, в условиях отсутствия стационарных клиник.

Противопоказания: не выявлены в рамках установленного производителем назначения.

Побочные эффекты: не обнаружены в рамках установленного производителем назначения.

1.10 Классификационные данные

Вид климатического исполнения – У1 по ГОСТ 15150-69 с ограничением по температуре от минус 40 до плюс 40 °С, относительной влажности воздуха до 100 % при плюс 25 °С., запыленности воздуха до 0,1 г/м³.

Модуль по вибропрочности и ударопрочности относится к группе 4 по ГОСТ Р 50444.

По типу защиты от поражения электрическим током соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 по электробезопасности для изделий класса I при питании от сети напряжением 220 В, и изделий с внутренним источником питания, при питании от внутреннего источника питания 12 В / 24 В, тип рабочей части В.

Модуль не предназначен для применения в среде с повышенным содержанием кислорода.

Степень защиты Модуля по ГОСТ 14254 – IPX0.

Модуль предназначен для продолжительного режима работы.

Класс в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях – 26 по ГОСТ 31508-2012, приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 июня 2012 г. № 4н.

2 ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ

2.1 Технические характеристики

Габаритные размеры Модуля соответствуют требованиям Таблицы 1.

Таблица 1

Базовое транспортное средство (БТС)	Габаритные размеры МЛПМ «Диагностика» варианты исполнения 1, 2, 3 Д*Ш*В, мм
57561Z	(8100 – 11000) * (2500 – 2550) * (2800 – 4000)
57550Z	(8100 – 12000) * (2500 – 2550) * (2800 – 4000)
57552Z	(8100 – 12000) * (2500 – 2550) * (2800 – 4000)
57530Z	(8100 – 12000) * (2500 – 2550) * (2800 – 4000)
47195Z	(9500 – 11000) * (2500 – 2550) * (2800 – 4000)
47193Z	(9500 – 11000) * (2500 – 2550) * (2800 – 4000)
87528Z	(8400 – 16000) * (2500 – 2550) * (2800 – 4000)
87551Z	(8400 – 12000) * (2500 – 2550) * (2800 – 4000)
87578Z	(8400 – 11500) * (2500 – 2550) * (2800 – 4000)

Показатели масс Модуля не превышают значения, установленные в паспорте транспортного средства на БТС, и/или соответствуют требованиям Таблицы 2.

Таблица 2

Базовое транспортное средство (БТС)	Максимально допустимая масса МЛПМ «Диагностика» варианты исполнения 1, 2, 3 не более, кг
57561Z	22500
57550Z	25200
57552Z	22400
57530Z	24000
47195Z	8700
47193Z	10000
87528Z	14000
87551Z	16000
87578Z	9900

Цветографическая схема Модуля соответствует требованиям ГОСТ 28385 и содержать указание медицинской специализации: ДИАГНОСТИКА. Цвет кузова фургона окрашивается в один из следующих цветов: бледно-бежевый, серо-бежевый или дымчатый.

Модуль при эксплуатации и транспортировании устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для исполнения У категории 1 по ГОСТ 15150 для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40 до 40 °С относительной влажности воздуха до 100 % при плюс 25 °С, запыленности воздуха до 0,1 г/м³.

Модуль при эксплуатации и транспортировании устойчив к механическим воздействиям для изделий группы 4 по ГОСТ Р 50444.

Лист

86567070.941149.001-01

5

2.2 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Система отопления Модуля состоит следующих компонентов:

- Электрические обогреватели;
- Тепловая воздушная завеса;
- Автономный (воздушный или жидкостной) отопитель, работающий на дизельном топливе или бензине.

Система вентиляции Модуля состоит следующих компонентов:

- Приточная фильтровентиляционная установка;
- Вентиляционные каналы;
- Вентиляционные люки.

Система кондиционирования Модуля исполнена следующим образом:

- Внешние охлаждающие блоки и внутренние блоки распределения воздуха (сплит-система);

Модуль снабжен окнами (количество не менее 1 и не более 4-х, в зависимости от габаритов Модуля и варианта исполнения в соответствии с конструкторской документацией).

Температура воздуха в медицинских помещениях и время её достижения соответствует требованиям по ГОСТ Р 56328.

Система кондиционирования обеспечивает снижение температуры в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 56328.

Приточная фильтро-вентиляционная установка системы вентиляции Модуля обеспечивает не менее чем 4-хкратный обмен воздуха.

2.3 Система электроснабжения

Система электроснабжения Модуля обеспечивает питание медицинских электрических изделий и специального оборудования, входящих в его состав в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Система электроснабжения Модуля соответствует требованиям по ГОСТ Р 56328.

Включение электрического оборудования входящего в состав Модуля осуществляется через специальный электронит, оборудованный защитными устройствами.

Электрические цепи Модуля оснащены устройствами защитного отключения и устройствами защиты от перегрузки согласно Приложению Г к настоящим ТУ.

Устройства имеют четкую маркировку для определения функции каждой электрической цепи.

Для обеспечения аварийного электропитания в составе Модуля не менее одной аккумуляторной свинцово-кислотной батареи емкостью не менее 100 А·ч – для БТС с напряжением бортовой сети 12 В, или не менее двух аккумуляторных свинцово-кислотных батарей емкостью не менее 100 А·ч каждая – для БТС с напряжением бортовой сети 24 В. Время работы Модуля от аккумуляторной батареи - 2 часа.

Электропитание Модуля осуществляется:

- От внешней сети переменного тока напряжением 220 В, с допустимым отклонением ± 10 %, частотой 50 Гц.
- От автономного генератора, обеспечивающий переменный ток напряжением 220 В, с допустимым отклонением ± 10 %, частотой 50 Гц.
- От бортовой сети БТС, обеспечивающей постоянный ток напряжением 12 В или 24 В, с допустимым отклонением ± 10 %.

Модуль оснащен 3-х проводным изолированным электрическим кабелем (с многожильными медными проводами) для подключения к внешней сети переменного тока, длиной не менее 30 м, с сечением каждого провода не менее 10 мм².

Модуль оборудован преобразователем напряжения бортовой сети БТС для приведения Модуля в транспортное положение, при отсутствии электроснабжения от

86567070.941149.001-01

Лист

6

сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц и/или от автономного генератора.

Медицинские помещения Модуля оснащены розетками в количестве не менее 4 шт. на каждое помещение для подключения оборудования питающихся от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц и работоспособными при отклонении напряжения питания $\pm 10\%$.

Максимальная потребляемая мощность Модулем:

- Не более 15 кВт при подключении к сети переменного тока.
- Не более 15 кВт при подключении к автономному генератору.
- Не более 4 кВт при подключении к бортовой сети БТС.

Система электроснабжения Модуля обеспечивает на стоянке от внешних источников электроснабжения подзарядку аккумуляторных батарей.

2.4 Система освещения

Общий уровень освещенности Модуля, за исключением технических и служебных помещений, на горизонтальной плоскости на высоте 1 м от пола на расстоянии 0,5 м от стеновых панелей не менее 100 лк.

Местное освещение на рабочих местах и манипуляционных полях не менее 300 лк при светодиодных лампах.

Аварийное освещение помещений Модуля обеспечивается от аккумуляторных батарей. Уровень аварийного освещения не менее 30 лк на горизонтальной плоскости на высоте 1 м от пола на расстоянии 0,5 м от стеновых панелей.

Подножки внешних дверей, площадки, трапы Модуля имеют местное освещение, обеспечивающее освещенность поверхностей не менее 40 лк. Дополнительное наружное освещение Модуля включает в себя светильники над внешними дверьми для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность на поверхности земли не менее 40 лк в радиусе 2 м от дверного проема.

2.5 Система водоснабжения

Система водоснабжения Модуля, оснащена емкостями для чистой воды объемом не менее 5 и не более 10 литров, емкостями для сбора сточных вод объемом не менее 10 и не более 20 литров. Соотношение объема емкостей для сбора сточных вод и канализации с запасом не менее 30% от объема емкостей для чистой воды.

Система водоснабжения, оснащена водонагревателями накопительного типа, объемом не менее 3-х литров и устройствами раздачи воды (краны, смесители, санитарно-техническая фурнитура) из расчета не менее одного и не более 4-х нагревателей на Модуль.

При необходимости, по требованию Заказчика, служебные помещения могут иметь санузел. В этом случае, санузел должен быть оснащен водонагревателем накопительного типа в комплекте с рукомойником с подачей подогретой воды и биотуалетом.

2.6 Материалы

Материалы, используемые для отделки потолочных и стеновых панелей помещений и мебели, светлых тонов. Торцы панелей мебели должны иметь контрастную окраску. Напольное покрытие изготовлено из противоскользящих антистатических материалов.

Все материалы и покрытия, применяемые в медицинских помещениях Модуля, устойчивы к моюще-дезинфицирующим средствам, рекомендованным для дезинфекционной обработки.

Материалы обтяжки рабочих кресел и сидений в части биологической соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993 и стандарту ГОСТ Р

86567070.941149.001-01

Лист

7

52770. Складки и морщины в обтяжках на наружных поверхностях отсутствуют. Металлические детали в салоне изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301. Покрытия соответствуют классам по ГОСТ 9.032:

- не ниже IV - для видимых;
- не ниже VI - для прочих.

Материалы, применяемые в Модуле, соответствуют требованиям пожарной безопасности, действующим на типе транспортного средства, в составе которого он находится.

2.7 Конструкция помещений.

Модуль соответствует требованиям к конструкции помещений в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 56328 с учетом специфичного медицинского назначения Модуля.

Высота медицинских и служебных помещений Модуля не менее 1800 мм.

Модуль оборудован внешними дверьми. Максимальное усилие открывания (закрывания) дверей не более 120 Н. Внешние двери располагаются с правой стороны по ходу движения и/или с торцевой (задней) части фургона.

Для обеспечения удобства при входе и выходе перед входной дверью Модуля предусмотрен наклонный трап, съемный на время движения, со ступенями (от 2-х до 10-ти) и поручнями. Горизонтальные поверхности трапа выполнены из перфорированного или рифленого металла и выдерживают нагрузку не менее 200 кгс. Поручни имеют диаметр в пределах от 20 до 40 мм.

Внешние двери снабжены предохранительными устройствами, соответствующими требованиям:

- открываться и закрываться без ключа изнутри и снаружи;
- открываться изнутри без ключа, если двери заперты ключом снаружи;
- отпираться и запираться ключом снаружи;
- открываться снаружи с помощью ключа, если двери заперты изнутри.

Ключ может быть механическим или немеханическим при наличии центрального замка.

Медицинские помещения оборудованы внутренними дверьми, разделяющими помещения.

Медицинские и служебные помещения имеют двери с шириной дверного проема в свету не менее 550 мм.

Помещения медицинские имеют окна, обеспечивающие естественную освещенность. Видимая поверхность остекления не менее 300х500 мм и не более 800х800 мм. Окна служат запасным/аварийным выходом.

Места крепления медицинских изделий обеспечивают их устойчивость к воспринимаемым механическим воздействиям при транспортировании для изделий группы 4 по ГОСТ Р 50444.

2.8 Средства связи.

Модуль соответствует требованиям к средствам связи в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 56328 с учетом специфичного медицинского назначения Модуля.

Модуль оборудован средствами внешней связи и передачи данных со стационарными медицинскими учреждениями посредством сотовой связи.

2.9 Оснащение медицинскими изделиями.

Медицинские изделия, входящие в состав Модуля, в зависимости от назначения, соответствуют 4 и 5 группе по ГОСТ Р 50444. При этом допускается использование медицинских изделий, не относящихся к группам 4 и 5 по ГОСТ Р 50444, при их хранении и транспортировании в соответствующих местах по п. 1.7.6.

Если к медицинским изделиям не предъявляются иные требования, то после хранения при температуре от минус 40 до 40 °С в составе Модуля они будут в рабочем состоянии при температуре 20 °С в течение не более 1 часа.

Если к медицинским изделиям не предъявляются иные требования, то будут в рабочем состоянии при температуре от 0 до 40 °С.

Если к медицинским изделиям не предъявляются иные требования, то после хранения при температуре 20°С, они будут в рабочем состоянии не менее 20 минут при температуре минус 5 °С.

2.10 Обращение с медицинскими отходами

Модуль снабжен специальным оборудованием для сбора и хранения медицинских отходов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684, включая цветовые обозначения данного оборудования.

2.11 Эргономика

Модуль по эргономике соответствует требованиям по ГОСТ Р 56328 с учетом специфичного медицинского назначения Модуля.

Для исключения изменения положения Модуля в пространстве при воздействии внешних факторов или при перемещении внутри помещений персонала и пациентов, Модуль может быть оборудован механическими или гидравлическими или электрическими выдвижными опорами. Опоры не предназначены и не могут использоваться для подъема и/или вывешивания БТС или его элементов.

Внешнее оснащение комплекса представлено разборным трапом. В транспортном положении трап может находиться в специальном грязезащитном ящике под днищем фургона или транспортироваться внутри фургона.

2.12 Модуль предназначен для продолжительного режима работы.

2.13 Средняя наработка на отказ не менее 2000 ч. Критерием отказа является несоответствие Модуля требованиям п. 1.2–1.4.

2.14 Средний срок службы Модуля не менее 5 лет с учётом срока службы покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы Модуля. Критерием предельного Состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления Модуля путем ремонта.

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОДУЛЯ В ЦЕЛЯХ, ОТЛИЧНЫХ ОТ УКАЗАННЫХ В ДОКУМЕНТАЦИИ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОДУЛЯ ПЕРСОНАЛОМ, КОТОРЫЙ НЕ ПРОШЕЛ ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С МОДУЛЕМ, НЕ ОЗНАКОМИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДУЛЯ И РУКОВОДСТВАМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ, ИДУЩИЕ В КОМПЛЕКТНОСТИ МОДУЛЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ МОДУЛЯ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОГО РУКОВОДСТВА, РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БТС, РУКОВОДСТВАМИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ, ИДУЩИЕ В КОМПЛЕКТНОСТИ МОДУЛЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МОДУЛЬ В НЕИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МОДУЛЬ С НЕИСПРАВНЫМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ МОДУЛЯ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЕГО ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ МОДУЛЯ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТНОГО РЕЖИМА!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОДУЛЬ ДЛЯ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОДУЛЬ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЕГО МЕДИЦИНСКИМ НАЗНАЧЕНИЕМ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ МОДУЛЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОТРЕБИТЕЛЮ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ И СОСТАВ МОДУЛЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ НЕИСПРАВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОТРЕБИТЕЛЮ ИЗМЕНЯТЬ, УДАЛЯТЬ, ЗАКРЫВАТЬ ЗНАКИ И НАДПИСИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПОВЕРХНОСТИ МОДУЛЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ К ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ КАБЕЛЯМИ, НЕ ВХОДЯЩИМИ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МОДУЛЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКРЫВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКРЫВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПРИБОРОВ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГОРАЖИВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ НЕЗАПОЛНЕННЫЕ ВОДОЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ НА ТРАПЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОДУЛЯ ПРИ ПОПАДАНИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ОТ БТС, АВТОНОМНОГО ГЕНЕРАТОРА, АВТОНОМНЫХ ОТОПИТЕЛЕЙ, СТОРОННИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВНУТРЬ МОДУЛЯ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОДУЛЯ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ ДЫМОВЫХ/ЗАГАЗОВАННОСТИ СО!

ВНИМАНИЕ!

Независимо от условий/режима электроснабжения подключение Модуля защитному заземлению обязательно!

ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией Модуля необходимо ознакомиться со всем комплектом эксплуатационной документации!

ВНИМАНИЕ!

Перед проведением профилактических и ремонтных работ необходимо обесточить Модуль, отключить от внешней электросети.

ВНИМАНИЕ!

Запрещена разборка Модуля с целью отдельного использования медицинских изделий, являющихся частью Модуля.

ВНИМАНИЕ!

Работы по вводу в эксплуатацию, контролю технического состояния, ремонту и техническому обслуживанию Модуля должны выполняться квалифицированными специалистами.

ВНИМАНИЕ!

Модификация изделия не допускается!

ВНИМАНИЕ!

Подсоединение электрических изделий к встроенному многорозеточному соединителю фактически приводит к созданию МЕ СИСТЕМЫ согласно ГОСТ Р МЭК 60601-1, что в результате может снижать уровень безопасности!

ВНИМАНИЕ!

Попадание осадков на автономный генератор не допускается!

4 ПОДГОТОВКА МОДУЛЯ К РАБОТЕ И ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

4.1 Ввод в эксплуатацию

ВНИМАНИЕ!

При вводе комплекса в эксплуатацию необходимо соблюдать требования безопасности, меры предосторожности настоящего Руководства.

При подготовке Модуля к работе, в первую очередь необходимо установить базовое транспортное средство на ровной площадке, открыть все двери, ящики, люки, вентиляционные шторки, установить опоры (при их наличии), собрать трап с перилами и обеспечить наличие электроснабжения от внешней сети или от автономного генератора. До подачи напряжения от внешней сети или от автономного генератора, подключив Модуль к бортовой сети базового транспортного средства через преобразователь напряжения, можно воспользоваться аварийным освещением, освещением 220В, автономным отопителем.

Перед подключением Модуля к внешней сети, к автономному генератору или при подключении преобразователя напряжения к бортовой сети базового транспортного средства, необходимо в первую очередь обеспечить защитное заземление комплекса.

Присоединение комплекса к контуру заземления обеспечивается либо через вводной кабель и вводную вилку, через провод заземления, либо кабелем заземления к зажиму защитного заземления.


Вводная вилка и зажим защитного заземления находятся под днищем фургона и имеют маркировку на борту Модуля.



Вводная вилка силового разъема с подключенной кабельной розеткой и зажим защитного заземления с маркировкой на борту Модуля.

Внутри Модуля устроен электромонтажный щит с пронумерованными элементами управления (дифференциальные и/или автоматические выключатели, устройства защитного отключения, переключатель, сигнальные и иные элементы).

Преобразователь напряжения размещен в служебном помещении.

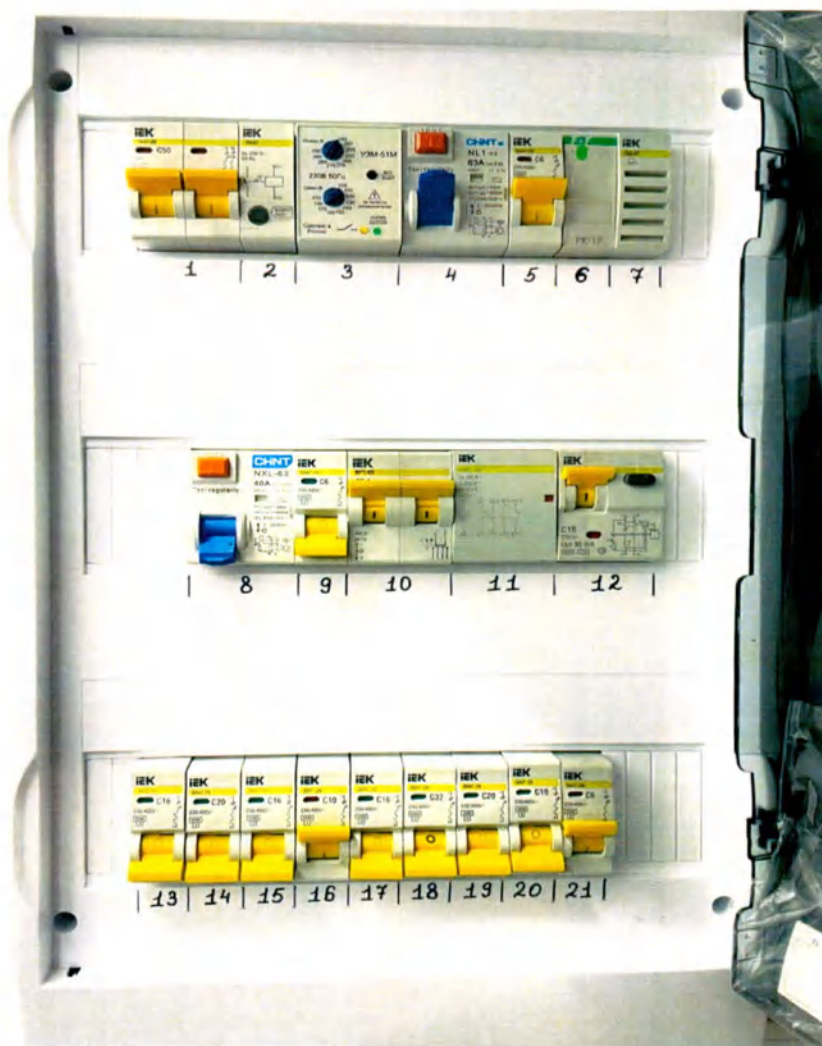

Внешний вид и компоновка электрического щита

Перед подключением Модуля к внешней сети или к автономному генератору или при подключении преобразователя напряжения к бортовой сети базового транспортного средства, необходимо перевести все автоматические выключатели и устройства защитного отключения в электромонтажном щите в выключенное положение (позиции №№ 1, 4, 5, 9, 13-21, трехпозиционный переключатель 10 перевести в среднее «нулевое» положение. На устройстве контроля уровня напряжения (поз. 2-3) установить пределы напряжения в диапазоне 210-230 В в соответствии с руководством по эксплуатации на устройство контроля. Включить все электрические потребители Модуля.

При подключении Модуля к внешней сети работают все электрические цепи и электрические потребители.

Для подключения Модуля к внешней сети необходимо подсоединить вводной кабель кабельной розеткой к вводной кабельной вилке Модуля, а свободными концами к электрораспределительному устройству, предназначенному для электрического подключения Модуля. При этом свободные концы вводного кабеля имеют следующую маркировку: коричневая или красная маркировка – фазный провод, синяя маркировка – нулевой, нейтральный провод, желто-зеленая, желтая маркировка – провод защитного заземления. Подключение к электрораспределительному устройству должно осуществляться с применением автоматического выключателя на 50А. После подключения кабеля необходимо подать на него напряжение со стороны электрораспределительного устройства. Далее перевести трехпозиционный переключатель (поз. 10) в верхнее положение «1», а автоматический выключатель (поз.1)

в верхнее положение (включено), при этом в случае некорректного подключения вводного кабеля к фазному и нулевому проводнику расцепитель (поз. 2) прервет подачу напряжения в электрическом щите. При корректном подключении вводного кабеля напряжение поступает на устройство контроля напряжения (поз. 3), которое контролирует параметры входного напряжения, и при его выходе за установленный на устройстве диапазон прерывает дальнейшую подачу напряжения.

При правильном подключении и соответствующем уровне напряжения на устройстве контроля уровня напряжения появится визуальная сигнализация зеленого цвета, при неправильном подключении, обрыве нуля, пониженном или повышенном уровне напряжения на устройстве контроля уровня напряжения появится визуальная сигнализация красного цвета, в этом случае необходимо проверить правильность подключения и уровень напряжения.

После появления на устройстве контроля уровня напряжения зеленой индикации включить автоматические выключатели необходимых цепей и устройств в электромонтажном щите в соответствии с Таблицей 3.

Электрический распределительный щит:

Таблица 3

№ ПОЗИЦИИ / ОБОЗНАЧЕНИЕ	Элемент управления электромонтажного шкафа	Номинал, А		
		Вариант исп-я 1	Вариант исп-я 2	Вариант исп-я 3
1 QS1	<i>Вводной автоматический выключатель режима работы от внешней сети переменного напряжения 220В.</i>	50	50	50
2 РН	<i>Расцепитель независимый РН-47.</i> Контролирует корректность подключения к внешней сети 220В (правильность подключения к фазному и нулевому проводникам). Сброс ошибки на расцепителе осуществляется нажатием на кнопку «ВОЗВРАТ RESET», расположенную в нижней части расцепителя.	-	-	-
3 QFD1	<i>УЗМ-51.</i> Устройство контроля напряжения. На данном устройстве устанавливаются верхний и нижний пределы напряжения внешней сети однофазного напряжения. При выходе за установленные пределы устройство отключается. Осуществляет визуальную индикацию наличия внешней сети и ошибок при подключении.	63	63	63
4 QFD2	<i>Устройство защитного отключения режима работы от внешней сети.</i>	63	63	63
5 QF1	<i>Автоматический выключатель режима работы МТ и Освещения.</i> При наличии сети 220В (внешняя сеть или генератор) и при включении выключателя контактор КМ 1 присоединяет к сети МТ и Освещение. При отсутствии сети или при выключении, контактор присоединяет МТ и Освещение к	6	6	6

86567070.941149.001-01

Лист

14

Таблица 3

№ ПОЗИЦИИ / ОБОЗНА- ЧЕНИЕ	Элемент управления электроустановочного шкафа	Номинал, А		
		Вариант исп-я 1	Вариант исп-я 2	Вариант исп-я 3
	преобразователю напряжения, преобразующему 12/24 В постоянного напряжения аккумуляторной батареи в 220В переменного напряжения. В режиме присоединения к преобразователю напряжения срабатывает звуковой сигнал (позиция 7 – Зуммер)			
6	Реле промежуточное РК-1Р подключения Зуммера. При наличии сети Зуммер отключен. При отсутствии сети и при подключении к преобразователю напряжения Зуммер включен.	16	16	16
7	Зуммер. Срабатывает при отсутствии сети 220В, сигнализирует о питании МТ и Освещения через преобразователь напряжения от АКБ 24/12В	-	-	-
8 QFD3	Устройство защитного отключения режима работы от автономного генератора.	40	40	40
9 QF2	Автоматический выключатель для линии вентиляции тех. помещения	6	6	6
10	Трехпозиционный переключатель режимов электропитания (0-выключено, 1 (вверх) – внешнее электропитание, 2 (вниз) – электропитание от автономного генератора)	63	63	63
11 KM 1	Контактор модульный.	25	25	25
12 QFD4	Дифференциальный автоматический выключатель для линии преобразователя напряжения/зарядного устройства (на выходе).	16	16	16
13 QF3	Автоматический выключатель для линии тепловой воздушной завесы.	16	16	16
14 QF4	Автоматический выключатель для линии системы водоснабжения (водонагревателя)	16	16	16
15 QF5	Автоматический выключатель для линии системы кондиционирования.	16	16	16
16 QF6	Автоматический выключатель для линии системы вентиляции.	10	10	10
17 QF7	Автоматический выключатель для линии электрического обогревателя (БТ)	20	20	20
18 QF8	Автоматический выключатель для линии стабилизатора напряжения / ИБП	32	32	32
19 QF9	Автоматический выключатель для линии преобразователя напряжения/зарядного	20	20	20

86567070.941149.001-01

Лист

15

Таблица 3

№ ПОЗИЦИИ / ОБОЗНА- ЧЕНИЕ	Элемент управления электроустановочного шкафа	Номинал, А		
		Вариант исп-я 1	Вариант исп-я 2	Вариант исп-я 3
	<i>устройства (на входе).</i>			
20 QF10	<i>Автоматический выключатель для линии МТ.</i>	10	10	10
21 QF11	<i>Автоматический выключатель для линии системы освещения.</i>	6	6	6

При подключения Модуля к автономному генератору не работают тепловая воздушная завеса и водонагреватели. При этом в холодное время года отопление осуществляется автономным отопителем.

Перед запуском автономного генератора необходимо выдвинуть его из технического помещения, зафиксировать его в выдвинутом положении специальными фиксаторами, а при наличии крана опустить генератора на землю. Запустить, прогреть автономный генератор, подать с него напряжение в соответствии с его эксплуатационной документацией. Не допускать попадания осадков на автономный генератор, не допускать попадания выхлопных газов автономного генератора внутрь Модуля через форточки, входной проем и/или фильтро-вентиляционную установку.

После запуска автономного генератора необходимо обеспечить вентиляцию технического помещения (при необходимости) путем перевода в верхнее включенное положение автоматического выключателя (поз.9) электрического щита, при этом в техническом помещении включается вытяжной вентилятор. Вентилятор должен постоянно работать до выключения автономного генератора.

Для подачи напряжения от автономного генератора к другим потребителям необходимо перевести трехпозиционный переключатель (поз. 10) в нижнее положение «2», перевести в верхнее включенное положение устройство защитного отключения (поз.8) а затем включить автоматические выключатели необходимых цепей и устройств в электроустановочном щите в соответствии с Таблицей 3.

В Модуле предусмотрено электроснабжение от бортовой сети базового транспортного средства потребителей постоянного тока 12/24 В (аварийное освещение, автономные отопители), а также потребителей переменного тока 220В (освещение, медицинская техника) через преобразователь напряжения.

Электроснабжение от бортовой сети в условиях отсутствия подключения к внешней сети или к автономному генератору позволяет осуществлять обогрев Модуля, в том числе в транспортном положении, использовать освещение Модуля при вводе в эксплуатацию и приведению его в транспортное положение.

Для подключения Модуля к бортовой сети транспортного средства необходимо привести во включенное положение выключатель нагрузки, находящийся возле аккумуляторного ящика базового транспортного средства. При этом аварийное освещение, автономные отопители, преобразователь напряжения подключаются к бортовой сети.

86567070.941149.001-01

Лист

16



Плавкий предохранитель на плюсовой клемме аккумуляторной батареи с маркировкой.



Плавкие предохранители в кабель-канале с маркировкой.



Выключатель нагрузки возле аккумуляторного ящика.

Бортовая сеть базового транспортного средства защищена плавкими предохранителями в соответствии с таблицей 4. Основной предохранитель располагается на плюсовой клемме аккумуляторной батареи базового транспортного средства.

Другие плавкие предохранители располагаются внутри кабель канала возле преобразователя напряжения и имеют соответствующую маркировку (Таблица 4).

Плавкие предохранители потребители цепей постоянного тока:

Таблица 4

№ ПОЗИЦИИ/ ОБОЗНА- ЧЕНИЕ	Электрическая цепь	Номинал, А		
		Вариант исп-я 1	Вариант исп-я 2	Вариант исп-я 3
FS1	Аварийное освещение.	5	5	5
FS2	Плюсовой проводник автономного отопителя 1	25	25	25
FS3	Минусовой проводник автономного отопителя 1	25	25	25
FS4	Плюсовой проводник автономного отопителя 2	25	25	25
FS5	Минусовой проводник автономного отопителя 2	25	25	25

FS6	<i>Предохранитель бортовой сети базового транспортного средств, расположен на плюсовой клемме АКБ.</i>	200/100	200/100	200/100
-----	--	---------	---------	---------

После подключения Модуля к бортовой сети базового транспортного средства необходимо включить преобразователь напряжения в соответствии с его эксплуатационной документацией. При этом при отсутствии подключения Модуля к внешней сети или к автономному генератору преобразователь напряжения автоматически подключается к своим потребителям в режиме генерации переменного напряжения 220В от бортовой сети транспортного средства.

При наличии подключения Модуля к внешней сети или к автономному генератору, включенном автоматическом выключателе (поз. 19) в электрическом щите, а также при подключении Модуля к бортовой сети базового транспортного средства, зарядное устройство осуществляет автоматический заряд батарей.

Отключение Модуля от электроснабжения осуществляется в обратном порядке.

После подключения Модуля к электроснабжению включить освещение, необходимые электрические потребители, проверить их работоспособность, с помощью элементов управления системой кондиционирования, системой вентиляции, системой отопления, установить требуемые значения температуры внутри помещений Модуля, отсоединить от крепежных элементов оборудование Модуля (стулья, мусорные ведра, уборочный инвентарь, канистры), заполнить емкости для чистой воды, провести уборку Модуля. Проверить исправность систем пожарной сигнализации и пожаротушения и сигнализации загазованности угарным газом. Проверить срок действия и давление в огнетушителях. При необходимости осуществить заправку баков автономного генератора и автономных отопителей.

4.2 Подготовка Модуля к транспортированию

Подготовку Модуля к транспортировке осуществлять в следующем порядке:

- осуществить уборку помещений Модуля;
- обесточить медицинские изделия, другие электрические потребители и при необходимости привести их в транспортное положение, закрепить полках, шкафах;
- слить воду из системы водоснабжения;
- закрепить оборудование Модуля (стулья, мусорные ведра, уборочный инвентарь, канистры);
- произвести отключение всех электроприборов на электрических щитах;
- отключить источник внешнего электропитания;
- отсоединить конец вводного кабеля от обесточенного источника внешнего электропитания;
- произвести отключение другого конца кабеля от вводного разъема Модуля;
- произвести отключение заземляющего провода (контакта);
- очистить кабели, разъемы, кабельный вилки и розетки от влаги, пыли, грязи, свернуть и уложить в транспортировочный ящик;
- разобрать трап и перила, очистить от пыли, влаги, грязи и уложить в отведенное для него место;
- собрать опоры;
- закрыть все вентиляционные шторки, люки, двери.

4.3 Очистка и дезинфекция

Очистка и дезинфекция состоит из двух протираний наружных поверхностей отделочных материалов салона салфеткой из марли по ГОСТ 11109-2022, смоченной 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5%-ного моющего средства по ГОСТ 25644-96 или 1%-ным раствором хлорамина Б.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Таблица 5

Виды технического обслуживания	Периодичность технического обслуживания	Содержание работы	Технические требования
Технический осмотр	Перед началом работы, после окончания работы	Проверка внешнего вида на отсутствие механических дефектов	Механические дефекты должны отсутствовать
Уход за Модулем	В начале рабочего дня, перед первой процедурой	Проверить исправность и работоспособность оборудования	Оборудование должно быть работоспособно в соответствии со своим назначением Каждая обработка состоит из двух протираний наружных поверхностей отделочных материалов салона салфеткой из марли по ГОСТ 11109-2022, смоченной 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5%-ного моющего средства по ГОСТ 25644-96 или 1%-ным раствором хлорамина Б
	Перед первой процедурой и после последней процедуры	Провести дезинфекцию комплекса	
Проверка технического состояния	Ежегодно, или после любого ремонта	Проверить: - состав и целостность принадлежностей и оборудования; - исправность и состояние монтажа, крепежных элементов; - работоспособность и исправность оборудования	Все принадлежности должны соответствовать комплектности первоначального заказа, не иметь механических повреждений. Монтаж должен соответствовать схеме первоначального заказа, крепежные элементы должны быть в полном комплекте и не иметь механических повреждений Оборудование должно быть работоспособно в соответствии со своим назначением

Ежедневное обслуживание проводится медицинским персоналом, допущенным к работе с Модулем.

Ежегодное обслуживание проводится медицинским персоналом, допущенным к работе с Модулем совместно с представителями службы технического обслуживания.

Ремонт и проведение проверок после него производится организациями, имеющими разрешение на проведение такого вида работ.

Техническое обслуживание шасси производится в соответствии с руководством по эксплуатации БТС.

Техническое обслуживание медицинских изделий и технического оборудования производится в соответствии с руководствами по эксплуатации (инструкциями) данных изделий и оборудования.

86567070.941149.001-01

Лист

20

6 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1 Условия транспортирования

Модуль может транспортироваться своим ходом, водным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок на транспорте данного вида.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 8 по ГОСТ 15150.

6.2 Условия хранения

Модуль должен храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 не более 1 года. При хранении необходимо учитывать требования к хранению базового шасси и требованиям по хранению других комплектующих изделий.

При транспортировании Модуля на длительные расстояния, при отсутствии возможности поддержания внутри помещений температуры выше 5 °С, то медицинские изделия внутри Модуля должны быть утеплены или помещены в транспортную упаковку.

7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

МЛПМ «Диагностика»

Варианты исполнения 1, 2, 3:

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
1	Базовое транспортное средство				
1.1	57561Z, 57550Z, 57552Z, 57530Z, 47195Z, 47193Z, 87528Z, 87551Z, 87578Z	ТР ТС 018/2011, ООО «Автомехани ческий завод», Россия	1 шт. из списка	1 шт. из списка	1 шт. из списка
2	Медицинские изделия				
2.1.1	Кресло гинекологическое- урологическое "Клер"- КГЭМ по ТУ 32.50.30- 002-43656656-2020 в вариантах исполнения: - «Клер»-КГЭМ-01, - «Клер»-КГЭМ-01-1, - «Клер»-КГЭМ-02, - «Клер»-КГЭМ-03.	РУ № ФСР 2008/03499, ООО ТПФ «Клер», Россия	1 шт.	-	-
	или Кресло гинекологическое КГ-04- «Диакомс» по ТУ 9452- 062-17099103-2010	РУ № ФСР 2010/08777, ООО "Диакомс", Россия			
	или Кресло гинекологическое КГ-3М по ТУ 9452-021- 07614107-2004	РУ № ФСР 2010/07066 АО "Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия			
2.1.2	Мебель медицинская складная "Полюс" по ТУ 9452-007-59563632-2015, вариант исполнения: Кушетка складная КС, с принадлежностями	РУ № РЗН 2016/4082 ООО "НПО "ПОЛЮС", Россия	1 шт.	1 шт.	2 шт.
	и/или Мебель медицинская для кабинетов и палат по ТУ 9452-001-16789225-2016 /	РУ № РЗН 2017/5521 ООО "Техсервис", Россия			

86567070.941149.001-01

Лист

22

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	Кушетка смотровая: М111-039.				
	и/или Кушетка медицинская по ТУ 32.50.30-010- 47272295-2018 вариант исполнения: МД КС-01	РУ № РЗН 2019/8453 ООО "НПО ПРОМЕТ", Россия			
2.1.3	Оборудование процедурное для медико- косметологического кабинета Кушетка процедурная, модель: Тур AF1	РУ № РЗН 2013/303 "ИОНТО Хелс энд Бьюти ГмбХ", Германия	-	1 шт.	-
	или Массажное кресло многофункциональное электрическое (для массажа рук, ног и тела, а также для проведения косметологических процедур) по ТУ 9452- 016-98238288-2016 вариант исполнения: ММКП-3	РУ № РЗН 2018/7621 ООО "Медтехника- Р", Россия			
	или Мебель медицинская складная "Полюс" по ТУ 9452-007-59563632-2015, вариант исполнения: Кушетка складная КС, с принадлежностями	РУ № РЗН 2016/4082 ООО "НПО "ПОЛЮС", Россия			
	или Мебель медицинская для кабинетов и палат по ТУ 9452-001-16789225-2016 / Кушетка смотровая: М111-039.	РУ № РЗН 2017/5521 ООО "Техсервис", Россия			
	или Кушетка медицинская по ТУ 32.50.30-010- 47272295-2018 вариант исполнения: МД КС-01	РУ № РЗН 2019/8453 ООО "НПО ПРОМЕТ", Россия			
2.1.4	Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441- 035-52962725-2014 вариант исполнения: Р- Ст-«МСК» (МСК 234) -	РУ № РЗН 2016/4294 ООО "Медсталькон струкция",	1 шт.	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости)

86567070.941149.001-01

Лист

23

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	предназначенный для измерения роста человека стоя.	Россия			
	или Ростомеры по ТУ 9452- 025-00226454-2006 вариант исполнения: - РЭП; - РЭС; - РП; - РС; - РП (эконом); - РЭП-И; - РЭС-И.	РУ № ФСР 2011/11607 АО "ТВЕС", Россия			
	или Весы медицинские электронные напольного типа сеса, с принадлежностями (принадлежность Ростомер сеса 217)	РУ № ФСЗ 2010/07366 "сека гмбх & ко. кг", Германия			
2.1.5	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441- 022-00226454-2005 варианты исполнения: -ВМЭН-150-50/100-А, -ВМЭН-200-50/100-А, - ВМЭН-150-50/100-Д1- А, -ВМЭН-150-50/100-И- Д1-А, -ВМЭН-200-50/100-Д1- А, -ВМЭН-200-50/100-И- Д1-А, - ВМЭН-150-50/100-Д2- А, -ВМЭН-150-50/100-И- Д2-А, -ВМЭН-200-50/100-Д2- А, -ВМЭН-200-50/100-И- Д2-А, -ВМЭН-150-50/100-Д3, -ВМЭН-150-50/100-И- Д3, -ВМЭН-200-50/100-Д3, -ВМЭН-200-50/100-И-	РУ № ФСР 2011/09964 Открытое акционерное общество "Тулиновский приборостро- ительный завод "ТВЕС", Россия	1 шт.	1 шт. (при необходимо- сти)	1 шт. (при необходим- ости)

86567070.941149.001-01

Лист

24

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	ДЗ, - ВМЭН-150-50/100-СТ- А, -ВМЭН-150-50/100-И- СТ-А, -ВМЭН-200- 50/100-СТ-А, -ВМЭН-200-50/100-И- СТ-А, -ВМЭН-150-50/100-А- ЗВ, -ВМЭН-200-50/100-А- ЗВ, -ВМЭН-150-50/100-С- СТ-А, -ВМЭН-150- 50/100-С-И-СТ-А, -ВМЭН-200-50/100-С- СТ-А, -ВМЭН-200- 50/100-С-И-СТ-А, -ВМЭН-150-50/100-С- Д1-А, -ВМЭН-150-50/100-С-И- Д1-А, -ВМЭН-200-50/100-С- Д1-А, -ВМЭН-200-50/100-С-И- Д1-А.				
	или Весы электронные медицинские ВЭМ-150- "Масса-К" по ТУ 4274- 017-27450820-2008 Варианты исполнения: - ВЭМ-150.3-А1 без стойки с тремя интервалами взвешивания - ВЭМ-150.3-А2 с круглой вращающейся стойкой с тремя интервалами взвешивания	РУ № ФСР 2008/02905 АО "МАССА- К", Россия			
2.1.6	Тонометр механический с принадлежностями, вариант исполнения: big ben	РУ № ФСЗ 2012/11768 «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия	1 шт. (при необходимо сти) или 2 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти) или 2 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости) или 2 шт. (при необходим ости)

86567070.941149.001-01

Лист

25

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
2.1.7	Измерители артериального давления серии ИАД-01- "Адьютор" по ТУ 26.60.12-003-58286981- 2019	РУ № РЗН 2020/12919, ООО "Адьютор", Россия	1 шт.	1 шт.	1 шт.
	или Измеритель артериального давления механический ИАДМ - "ТРИВЕС-ПЧЗ-М" по ТУ 9441-002-33094849- 2005 с принадлежностями	РУ № ФСР 2010/08666, ООО "Тривес", Россия			
	или Измеритель артериального давления мембранный ИАДМ-01- Медтехника с принадлежностями по ТУ 9441-015-27418804- 2007	РУ № ФСР 2008/01763, ООО "МЕДТЕХНИ КА", Россия			
	или Измеритель артериального давления CS Medica CS-105 в комплекте	РУ № ФСЗ 2009/04070, "Шэньчжень Комплектсерв ис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.", Китай			
	или Приборы для измерения артериального давления моделей PRO-60, MED- 61, MED-62, MED-63 с принадлежностями	РУ № РЗН 2018/7689, "Би.Велл Свисс АГ", Швейцария			
	или Тонومتر механический с принадлежностями, варианты исполнения: - R1-shock proof; - minimus II; - minimus III; - precisa N; - e-mega; - ri-san; - exacta; - sphygmotensiophone; - babyphon;	РУ № ФСЗ 2012/11768, "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия			

86567070.941149.001-01

Лист

26

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	- sanaphon.				
2.1.8	Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M3 Expert (HEM-7132-ALRU)	РУ № РЗН 2015/3210 "ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд.", Япония	1 шт. (при необходимо сти) или 2 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости) или 2 шт. (при необходим ости)
2.1.9	Стетоскоп акушерский деревянный Сад-"М- МИЗ" по ТУ 9398-093- 07613473-2003	РУ № ФСР 2007/00767, ОАО "Можайский медико- инструментал ьный завод", Россия	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	1 (при необходим ости)
2.1.10	Стетофонендоскоп CS Medica вариант исполнения: Стетофонендоскоп CS Medica CS-421	РУ № ФСЗ 2009/04072 «Шэньчжень Комплектсерв ис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.», Китай	2 шт.	2 шт.	2 шт.
	и/или Стетофонендоскопы «СФ-Адьютор» по ТУ 26.60.12-002-58286981- 2019, варианты исполнения: - Стетофонендоскоп СФ- 01-"Адьютор" с односторонней фонендоскопической головкой для аускультации тонов Короткова у взрослых. - Стетофонендоскоп СФ- 02-"Адьютор" с двусторонней фонендоскопической и стетоскопической головкой для детей для аускультации тонов Короткова у взрослых и детей. - Стетофонендоскоп СФ- 03-"Адьютор" Раппорта с серыми	РУ № РЗН 2014/1813, ООО "АДЬЮТОР", Россия			

86567070.941149.001-01

Лист

27

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей. - Стетофонендоскоп СФ-03У-"Адьютор" Раппорта с серыми удлиненными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей. - Стетофонендоскоп СФ-03.1-"Адьютор" Раппорта с синими трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей. - Стетофонендоскоп СФ-03.2-"Адьютор" Раппорта с розовыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей. - Стетофонендоскоп СФ-03.3-"Адьютор" Раппорта с оранжевыми трубками звукопровода с набором				

86567070.941149.001-01

Лист

28

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей. - Стетофонендоскоп СФ-03.4-"Адьютор" Раппорта с зелеными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей. - Стетофонендоскоп СФ-03.5-"Адьютор" Раппорта с черными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей. - Стетофонендоскоп СФ-03.6-"Адьютор" Раппорта с красными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей. - Стетофонендоскоп СФ-03.7-"Адьютор" Раппорта с желтыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических				

86567070.941149.001-01

Лист

29

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей. - Стетофонендоскоп СФ- 03.8-"Адьютор" Раппорта с фиолетовыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей.				
	и/или Стетофонендоскоп Б.Е.Вотчала СФОН-01 по ТУ 64-1-3121-77	РУ № ФСР 2010/07228, Закрытое акционерное общество "Нижнетагиль- ский медико- инструментал- ьный завод", Россия			
	и/или Стетофонендоскоп CS Medica CS-417	РУ № ФСЗ 2009/04073, "Шэньчжень Комплектсерв ис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.", Китай			
	и/или Стетофонендоскоп CS Medica CS-422 Premium	РУ № РЗН 2017/6524, "Шэньчжень Комплектсерв ис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.", КНР			
2.1.11	Электронный стетофонендоскоп Littmann варианты исполнений: - 3100;	РУ № ФСЗ 2010/07526 "3М Компани, 3М Хелс Кеар", США	1 шт. (при необходимо- сти)	1 шт. (при необходимо- сти)	1 шт. (при необходим- ости)

86567070.941149.001-01

Лист

30

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	- 3200.				
2.1.12	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-«САША» по ТУ 4274-018-27450820-2004, вариант исполнения: В1-15.3К	РУ № РЗН 2013/1197 АО "МАССА-К", Россия	1 шт. (при необходимости)	-	-
	или Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНД-01-"Малыш" по ТУ 4274-021-00226454-2002	РУ № ФСР 2011/11958 Открытое акционерное общество "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия			
2.1.13	Термометры электронные, вариант исполнения: DT-623	РУ № ФСЗ 2011/09384 "Вега Текнолоджис Инк.", Китай	1 шт.	1 шт.	1 шт. (при необходимости)
	или Термометр электронный медицинский OMRON Eco Temp Basic (MC-246-RU)	РУ № ФСЗ 2009/05423, OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония			
	или Термометр инфракрасный бесконтактный TOPMED с принадлежностями, варианты исполнения: NC-178, NC-186, NC-192	РУ № РЗН 2018/7384 "Гуанчжоу Цзиньсиньбао Электроник Ко., Лтд.", КНР			
	или Термометры медицинские инфракрасные SENSITEC, варианты исполнения: бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NF-3102, бесконтактный	РУ № ФСЗ 2011/10946, "Апексмед Интернэшнл Б. В.", Нидерланды			

86567070.941149.001-01

Лист

31

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	инфракрасный термометр SENSITEC NF-3101, бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NF-3103, бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NB-401, бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NB-402, инфракрасный термометр SENSITEC ET-211				
2.1.14	Электрокардиограф 3-6- 12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-"Р-Д" по ТУ 2660-005-24149103-2018, варианты исполнения: - ЭК12Т-01-"Р-Д"/141, МТЦ.31.00.000 - ЭК12Т-01-"Р-Д"/260	РУ № ФСР 2012/14015, ООО «НПП «Монитор», Россия	1 шт.	1 шт.	1 шт.
	или Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6- 04 "АКСИОН" с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004	РУ № ФСР 2008/01874, ОАО Концерн "Аксион", Россия			
	или Комплекс аппаратно- программный "Валента" для проведения исследований функциональной диагностики по ТУ 9441- 001-80502299-2007	РУ № ФСР 2007/00259, ООО "Компания Нео", Россия			
2.1.15	Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД "Валента" по ТУ 9441-002-80502299-2007	РУ № ФСР 2007/00260 ООО "Компания	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости) или
			86567070.941149.001-01		

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
		Нео", Россия			3 шт. (при необходим ости)
	или Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком-комби» по ТУ 9442-001- 86580521-2014 в составе с регистратором КР-06	РУ № РЗН 2015/2451, ООО "МЕДИКОМ" , Россия			
2.1.16	Система для снятия и анализа ЭКГ при нагрузках DIXION STRESS ECG ST-1212 с принадлежностями	РУ № ФСЗ 2009/04619 "Эдан Инструментс, Инк.", Китай	-	-	1 компл. (при необходим ости)
	или Комплекс для нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ и реабилитации с биологической обратной связью по ТУ 26.60.12- 041-13218158-2018 Варианты исполнения: - Комплектация для нагрузочного тестирования и для проведения физических тренировок под контролем ЭКГ (включая кардиореабилитацию), в том числе с использованием биологической обратной связи, "Мультитренер", - Комплектация для нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ "Эргопойнт"	РУ № РЗН 2019/8689 ООО "Нейрософт", Россия			
	или Комплекс аппаратно- программный электрокардиографическ ий для нагрузочных проб "Альтон-тест" по ТУ 9441-070-56723727-2002	РУ № ФСР 2012/13610 ООО "АЛЬТОНИК А", Россия			

86567070.941149.001-01

Лист

33

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	Варианты исполнения: - Исполнение ГКУН.944183.070-01, - Исполнение ГКУН.944183.070-02				
2.1.17	Пульсоксиметр медицинский "Armed", вариант исполнения: УХ301	РУ № ФСЗ 2010/07461 "Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", Китай	2 шт.	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости)
	и/или Пульсооксиметр для определения частоты пульса и насыщения гемоглобина крови кислородом ПО-02- "КАРДЕКС" по ТУ 9441- 003-25630854-00 с принадлежностями	РУ № ФСР 2008/02293 ООО "КАРДЕКС", Россия			
2.1.18	Устройство-спиротест цифровое скринингового определения жизненной емкости легких и объема первого секундного форсированного выдоха портативное УСПЦ-01	РУ № ФСР 2007/00694 ООО "МИТК- М", Россия	1 шт.	-	1 шт. (при необходим ости)
	или Устройство мониторинга параметров внешнего дыхания человека, портативное цифровое "Спиротест УСПЦ-01М" по ТУ 26.60.12-003- 18859607-2020, в составе с принадлежностями	РУ № РЗН 2022/18043, ООО "МИТК- М", Россия			
	или Аппараты для спирометрии и пульсоксиметрии MIR с принадлежностями мод.: Spirobank I/G/II.	РУ № РЗН 2017/5323 "МИР С.р.л. - МЕДИКАЛ ИНТЕРНЕШ НЛ РИСЕРЧ", Италия			
	или Спирометр автономный запоминающий MAC2 с принадлежностями, варианты исполнения	РУ № РЗН 2017/5851 ООО "Белинтелмед ", Республика			
86567070.941149.001-01					Лист
					34

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	MAC2-Б, MAC2-С, MAC2-ПК, MAC2-БМ, MAC2-ПКм	Беларусь			
2.1.19	Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443- 022-11254896-2009 с принадлежностями	РУ № ФСР 2009/06211 ООО НПП "ТЕХНОМЕД ИКА", Россия	1 шт.	1 шт.* (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости)
	или Анализаторы для определения глюкозы HemoCue Glucose 201+ и гемоглобина моделей HemoCue Hb 201+ и Plasma/Low Hb с принадлежностями	РУ № РЗН 2016/3622 "ХемоКью АБ", Швеция			
	или Анализатор крови портативный биохимический EasyTouch® варианты исполнения: EasyTouch® G, EasyTouch® GC, EasyTouch® GHb, EasyTouch® GU, EasyTouch® GCU, EasyTouch® GCHb.	РУ № ФСЗ 2011/10454 Биоптик Технолоджи, Инк., Тайвань			
2.1.20	Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови "Акку- Чек Актив" (Accu-Chek Active) с принадлежностями	РУ № ФСЗ 2007/00817 "Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Германия	1 шт.	4 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости)
	и/или Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный ПКГ- 02.4 "Сателлит плюс" в комплекте с полоской электрохимической	РУ № ФСР 2011/12519 ООО "Компания "ЭЛТА", Россия			

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	однократного применения ПКГЭ-02.4 по ТУ 9443-002- 78939528-2006				
	или Система контроля уровня глюкозы крови (глюкометр) «Акку- Чек® Инстант» (Accu- Chek® Instant)	РУ № РЗН 2021/13212 "Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Германия			
2.1.21	Дефибриллятор PRIMEDIC HeartSave (M250) в вариантах исполнения с принадлежностями: варианты исполнения: HeartSave PAD (M250), HeartSave AED (M250), HeartSave AED-M (M250), HeartSave 6 (M250)	РУ № РЗН 2018/6871 «Метракс ГмбХ», Германия	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт.
	или Дефибрилляторы SCHILLER с принадлежностями: FRED мод. easy	РУ № РЗН 2016/4584 "Шиллер АГ", Швейцария			
	или Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015 Вариант исполнения: - Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01	РУ № РЗН 2017/5391 ООО Концерн "Аксион", Россия			
	или Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями варианты исполнения: PRIMEDIC DEFI-N (M100) PRIMEDIC DEFI-B (M110)	РУ № ФСЗ 2011/10093, Метракс ГмбХ, Германия			
2.1.22	Инструменты оттесняющие по ТУ 9434-293-07610776- 2010	РУ ФСР 2011/10303 ОАО "МИЗ- Ворсма", Россия	1 шт. (при необходимо сти)	-	1 шт. (при необходим ости)

86567070.941149.001-01

Лист

36

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	или Инструменты медицинские хирургические Инструменты медицинские хирургические Вариант исполнения: Инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: щипцы: зажимной инструмент: J-33-500 - J- 33-560	РУ № РЗН 2015/3121, "Сурджикон ЛТД", Пакистан			
2.1.23	Ингалятор кислорода КИ-5 по 9В2.933.227ТУ	РУ № ФСР 2011/09914 АО "КАМПО", Россия	1 шт. (при необходимо сти)	-	-
	или Ингалятор кислородный КИ-11 по ТУ ППТД.2933.001ТУ	РУ № ФСР 2009/06202 ООО "Пневмоприб ор", Россия			
2.1.24	Облучатели- рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3- 3-«КРОНТ» по ТУ 9451- 029-11769436-2006, варианты исполнения: - «Облучатель- рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-3- «КРОНТ» - «Облучатель- рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3- 3-«КРОНТ»	РУ № ФСР 2011/11388 АО "КРОНТ- М", Россия	3 шт. или 4 шт.	3 шт. или 4 шт.	3 шт. или 4 шт.
	или Облучатель- рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный ОРУБ-2-01-«КРОНТ» по	РУ № ФСР 2011/12132 АО "КРОНТ- М", Россия			

86567070.941149.001-01

Лист

37

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	ТУ 9451-019-11769436-2003, варианты исполнения: - настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» (Дезар-2н) - передвижной ОРУБп2-01- «КРОНТ» (Дезар-2п)				
	или Рециркулятор УФ-бактерицидный трехламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ-20-«Я-ФП» по ТУ 9451-020-55307168-2012, варианты исполнения: - РБ-20-«Я-ФП»-01, (модели: РБ-20-«Я-ФП»-01, РБ-20-«Я-ФП»-01П); - РБ-20-«Я-ФП»-02, (модели: РБ-20-«Я-ФП»-02, РБ-20-«Я-ФП»-02П)	РУ № РЗН 2013/654 ООО Общество с ограниченной ответственностью "Ферропласт Медикал" ("Ферропласт Медикал"), Россия			
	или Рециркуляторы УФ-бактерицидные для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей "СПДС" по ТУ 9451-002-75620370-2010 варианты исполнения: "СПДС-50-Р" "СПДС-100-Р".	РУ № ФСР 2010/09816 ООО "СПДС", Россия			
2.1.25	Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004, вариант исполнения: ХФ-140«ПОЗИС»	РУ № ФСР 2009/05705 АО "ПОЗИС", Россия	1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости)	1 шт. (при необходимости)	1 шт. (при необходимости)
	или Оборудование медицинское для хранения лекарственных средств и вакцин НУС с принадлежностями вариант исполнения:	РУ № ФСЗ 2010/08608 "Циндао Хайер Биомедикал Ко., Лтд.", Китай			

86567070.941149.001-01

Лист

38

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	НУС-68				
	или Камеры холодильные медицинские "Бирюса" по ТУ 28.25.13-020- 07550181-2019 Варианты исполнения: "Бирюса 150K-G", "Бирюса 150K-R", "Бирюса 150K-GB", "Бирюса 150K-RB"	РУ № РЗН 2019/9387, ОАО "КЗХ "Бирюса", Россия			
	и/или Холодильник фармацевтический двухкамерный по ТУ 9452-207-07503307-2014, модели: - ХФД-280 «POZIS», - ХФД-280-1 «POZIS»	РУ № РЗН 2015/3531, АО "ПОЗИС", Россия			
2.1.26	Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ, вариант исполнения: шкаф медицинский навесной для фармпрепаратов	РУ № РЗН 2019/9071 АО "ЕПЗ", Россия	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости)
	или Мебель медицинская по ТУ РБ 600182902.004- 2003, варианты исполнения: Шкаф медицинский навесной Н2, шкаф медицинский навесной Н2/А	РУ № РЗН 2017/5288 ЗАО "СТРУМ", Республика Беларусь			
	или Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969- 2012 вариант исполнения: шкаф навесной одностворчатый М-ШН- 40	РУ № ФСР 2012/13501 ООО "МЕДЕЛИЯ", Россия			
2.1.27	Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями,	РУ № ФСР 2009/05373 АО "ЕПЗ", Россия	10 шт. (при необходимо сти)	3 шт. (при необходимо сти)	3 шт. (при необходим ости)

86567070.941149.001-01

Лист 39

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	варианты исполнения: ЕДПО-1-01 ЕДПО-1-01-2 ЕДПО-1-02 ЕДПО-1-02-2 ЕДПО-3-01-2 ЕДПО-3-02-2				
2.1.28	Контейнеры одноразовые, многократные для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов МК «МедКом» по ТУ 9398-004-63102960-2012 вариант исполнения: - Контейнер (бак) многократный для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов классов А, Б, В, Г МК-03 «МедКом» (вид 123680), объемом 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0 л, с принадлежностью- колесная опора «МедКом».	РУ № ФСР 2012/14154 ООО «НПФ «МедКом», Россия	5 шт. (при необходимо сти)	3 шт. (при необходимо сти)	3 шт. (при необходим ости)
2.1.29	Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965- 2017 с принадлежностями. Класс А	РУ № РЗН 2014/2254 ООО "ИННОВАЦИ Я", Россия	2 шт. (при необходимо сти)	2 шт. (при необходимо сти)	2 шт. (при необходим ости)
2.1.30	Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических	РУ № РЗН 2014/2254 ООО "ИННОВАЦИ Я", Россия	2 шт.	2 шт.	2 шт.
			86567070.941149.001-01		
			Лист		
			40		

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965- 2017 с принадлежностями. Класс Б				
	или Контейнеры одноразовые, многократные для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов МК «МедКом» по ТУ 9398-004-63102960-2012 вариант исполнения: - Контейнер (бак) многократный для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов классов А, Б, В, Г МК-03 «МедКом» (вид 123680), объемом 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0 л, с принадлежностью- колесная опора «МедКом».	РУ № ФСР 2012/14154 ООО «НПФ «МедКом», Россия			
2.1.31	Сумка-укладка врача общей практики с наборами медицинскими диагностическими СУВОП-"ДжиСиМед" по ТУ 9398-001-86567070- 2009, варианты исполнения: СУВОП-1, СУВОП-2, СУВОП-3, СУВОП-4, СУВОП-5, СУВОП-6	РУ № ФСР 2010/06761 ООО "ДжиСиМед", Россия	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости)
	или Набор изделий для врача общей практики НВОП- 01-"МЕДИНТ-М" в сумке универсальной СМУ-03 по ТУ 32.50.13- 012-18585567-2005	РУ № ФСР 2010/08890 ООО "МЕДПЛАНТ ", Россия			
2.1.32	Стетоскоп с принадлежностями,	РУ № ФСЗ 2012/12207,	2 шт. (при	2 шт. (при	2 шт. (при
86567070.941149.001-01					Лист
					41

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	вариант исполнения: Duplex	«Рудольф Ристер ГмбХ», Германия	необходимо сти)	необходимо сти)	необходим ости)
	и/или Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения: Cardiophon	РУ № ФСЗ 2012/12207, «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия			
2.1.33	Анализатор биохимический Spotchem на основе принципа «сухой химии», в исполнении: модель EZ (SP-4430), с принадлежностями	РУ № ФСЗ 2012/13500 "АРКРЭЙ Фэктори, Инк.", Япония	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт.* (при необходимо сти) или 2 шт.* (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости)
	и/или Экспресс-анализатор биохимический портативный "Аккутренд Плюс" (Accutrend Plus) с принадлежностями	РУ № ФСЗ 2008/02119 "Рош Диагностикс ГмбХ", Германия			
	и/или Экспресс-анализатор параметров крови портативный, с принадлежностями варианты исполнения: blueCare, multiCare-in,	РУ № ФСЗ 2011/10072 "Биокемикал Системз Интернэйшнл С.п.А.", италия			
	и/или Анализатор крови биохимический портативный, Варианты исполнения: CardioChek, с принадлежностями CardioChek PA, с принадлежностями	РУ № РЗН 2015/2693 "Полимер Технолоджи Системс, Инк.", США			
2.1.34	Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ	РУ № РЗН 2015/2997 АО "Елатомский приборный завод", Россия	2 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	-
2.1.35	Индикатор внутриглазного давления	РУ № ФСР 2009/06397	2 шт. (при	1 шт. (при	-

86567070.941149.001-01

Лист

42

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	портативный ИГД-02 "ПРА" по БИРМ.941329.005 ТУ	АО "Государственный Рязанский приборный завод", Россия	необходимо	необходимо	
2.1.36	Приборы оптические диагностические для офтальмологии и принадлежности к ним/ Приборы оптические диагностические для офтальмологии/ Офтальмоскопы, исполнение: ri-score L	РУ № ФСЗ 2009/03907 "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия	1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости)	1 шт. или 2 шт.	-
	и/или Офтальмоскоп RISSCOLIGHT E50	РУ № РЗН 2019/8089 "КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ" Германия			
	и/или Офтальмоскопы прямые медицинские, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями/ вариант исполнения: Офтальмоскоп прямой медицинский BETA 200 S	РУ № РЗН 2016/4244 "Хайне Оптотехник ГмбХ и Ко., КГ", Германия			
	и/или Офтальмоскоп налобный бинокулярный НБО-3 по ТУ 3-3.2304-90	РУ № ФСР 2011/10602, Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод", Россия			
	и/или Офтальмоскоп ручной универсальный ОР-3Б "Блик" по ТУ 3-3.2303-91	РУ № ФСР 2011/10601, Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод", Россия			
	и/или	РУ № РЗН			

86567070.941149.001-01

Лист

43

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	Офтальмоскоп не прямой бинокулярный, варианты исполнения: Офтальмоскоп не прямой OMEGA 600, Офтальмоскоп не прямой SIGMA 250	2024/22198, "ХАЙНЕ Оптотехник ГмбХ и Ко. КГ", Германия			
	и/или Приборы оптические диагностические медицинские с принадлежностями, вариант исполнения: Офтальмоскопы, модели OMEGA 500.	РУ № РЗН 2016/4414, "Хайне Оптотехник ГмбХ и Ко., КГ", Германия			
	и/или Офтальмоскоп All Pupil II с принадлежностями	РУ № ФСЗ 2012/12790, "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия			
2.1.37	Лампа щелевая офтальмологическая HS с принадлежностями вариант исполнения: HS- 5500	РУ № ФСЗ 2011/10647 "Хувитц Ко., Лтд", Корея	-	1 шт.	-
	или Лампа щелевая ЛС-01- "Зенит" по ТУ 9442-006- 07526142-2009	РУ № ФСР 2010/06759 ПАО «Красногорск ий завод им. С.А.Зверева», Россия			
	или Лампа щелевая офтальмологическая TSL-5000 с принадлежностями	РУ № ФСЗ 2011/11147 Томэй ГмбХ, Германия			
2.1.38	Щелевая лампа офтальмологическая ручная модели XL-1 в комплекте с принадлежностями	РУ № РЗН 2016/4151 "Рексам Ко., Лтд.", Япония	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	-
2.1.39	Стол приборный СП-01 в вариантах исполнения по ТУ 9452-001-86577849- 2009 В следующем исполнении: Стол	РУ № ФСР 2009/04981 ООО "Красивая планета", Россия	-	1 шт. (при необходимо сти)	-

86567070.941149.001-01

Лист

44

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	приборный СП-01-01				
	или Стол медицинский с электроприводом СО по ТУ 32.50.30-008- 01324118 с принадлежностями: Вариант исполнения: Стол медицинский с электроприводом СО-1 по ТУ 32.50.30-008- 01324118-2021 с принадлежностями	РУ № РЗН 2022/17028 ООО "ТАГЛЕР", Россия			
2.1.40	Камера цифровая офтальмологическая Аугога	РУ № РЗН 2019/8525 "Оптомед Оюй", Финляндия	-	1 шт. (при необходимо сти)	-
2.1.41	Комплект высокодигитрильных асферических линз для диагностики и исследования глазных сред совместно с щелевыми лампами КЛА-01-"Поиск ТР" по ТУ 9398-001-18898190- 2004	РУ № ФСР 2008/03134 ООО "Поиск ТР", Россия	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходимо сти)	-
2.1.42	Аппарат педикюрный Podolog с принадлежностями вариант исполнения: Podolog Eco	РУ № ФСЗ 2012/13046 "Хельмут Рук ГмбХ", Германия	-	1 компл. (при необходимо сти)	-
	или Аппарат процедурный с принадлежностями исполнение: PeditSprint 100SP	РУ № РЗН 2013/304 "ИОНТО Хелс энд Бьюти ГмбХ", Германия			
2.1.43	Камера УФ- бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-03- "Я"-ФП по ТУ 9452-003- 55307168-2004	РУ № ФСР 2009/06570 ООО «Ферропласт Медикал», Россия	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт.	-
	или Камеры бактерицидные для хранения	РУ № ФСР 2010/09347, ООО			

86567070.941149.001-01

Лист

45

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	простерилизованных медицинских инструментов-"СПДС" по ТУ 9452-001- 75620370-2010 Варианты исполнения: "СПДС-1-К", "СПДС-2-К", "СПДС-3-К"	"СПДС", Россия			
2.1.44	Лампа бестеневая с увеличительной лупой с регулируемой интенсивностью освещения "АтисМед ЛЛ", с принадлежностями вариант исполнения: "АтисМед ЛЛ-3"	РУ № РЗН 2016/4378 ООО "Атис Групп", Россия	-	1 шт.	-
	или Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED- MOS, вариант исполнения: 9005LED	РУ № РЗН 2020/12616 "НИНГБО ИНТБРАЙТ ТЕКНОЛОД ЖИ КО., ЛТД", Китай			
2.1.45	Индикатор ультразвуковой доплеровский оперативной диагностики скорости кровотока "Минидоп", исполнение: "Минидоп- 8" по ТУ 9442-018- 17201375-2013	РУ № РЗН 2014/2045 АО "НПФ "БИОСС", Россия	-	1 шт.	-
	или Анализатор скорости кровотока ультразвуковой СОНОМЕД 300М по ТУ 9442-300-31322051-2008 вариант исполнения: СОНОМЕД 300М-1В многофункциональный прибор для доплеровских обследований в D и M режимах, во внешнем специализированном корпусе.	РУ № ФСР 2009/04499 ООО "СПЕКТРОМ ЕД", Россия			

86567070.941149.001-01

Лист

46

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
2.1.46	Анализатор ультразвуковой доплеровский скорости кровотока компьютеризированный "Ангиодин"-УК" по ТУ 9442-010-17201375-2005	РУ № ФСР 2010/08233 АО "НПФ "БИОСС", Россия	-	1 шт. (при необходимо сти)	-
2.1.47	Система ультразвуковой визуализации универсальная серии MX с принадлежностями, вариант исполнения: MX7	РУ № РЗН 2021/15226 "Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт.
	или Аппарат ультразвуковой диагностический DP-50 с принадлежностями	РУ № ФСЗ 2011/10257 "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", Китай			
	или Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid iq с принадлежностями	РУ № РЗН 2017/6506 "ДжиИ Медикал Системз (Китай) Ко., Лтд.", Китай			
	или Прибор цифровой ультразвуковой диагностический M5 с принадлежностями	РУ № ФСЗ 2008/01996 "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР			
	или Прибор ультразвуковой диагностический M7 с принадлежностями	РУ № ФСЗ 2010/07629 "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР			
	или Система ультразвуковая диагностическая медицинская Versana	РУ № РЗН 2022/17101 "ДжиИ Медикал			

86567070.941149.001-01

Лист

47

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	Active с принадлежностями	Системз (Китай) Ко., Лтд.", Китай			
	или Прибор ультразвуковой диагностический с принадлежностями Варианты исполнения: DUS 3, DUS 6, DUS 8, DUS 60, U50	РУ № ФСЗ 2011/10381 "Эдан Инструментс, Инк.", Китай			
	или Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями Варианты исполнения: S2N, S8Exp, S9, S30.	РУ № РЗН 2013/1328, "СОНОСКЕЙ П МЕДИКАЛ КОРП.", Китай			
2.1.48	Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках/ В отдельных упаковках/ Инструмент для диагностики нервной проводимости / вариант исполнения: buck	РУ № ФСЗ 2010/08456 "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия	1 шт.	1 шт.	-
	или Молоток неврологический для исследования сухожильных рефлексов МН-"М-МИЗ" по ТУ 9439-034-07613473-2005	РУ № ФСР 2009/06065 ОАО "Можайский медико- инструментал ьный завод", Россия			
2.1.49	Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения: - по Риделю-Сейферу 64 Гц/128 Гц с подставкой	РУ № ФСЗ 2010/08456 "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия	1 шт. (при необходи- мо сти)	1 шт. (при необходи- мо сти)	-

86567070.941149.001-01

Лист

48

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	- С-1 256 Гц				
	или Камертоны медицинские, вариант исполнения: Камертон с 128/с 64 Hz по Рюдель-Зейфферу из стали с демпферами	РУ № РЗН 2022/18824 "Кирхнер & Вильгельм ГмбХ + Ко. КГ", Германия			
2.1.50	Экспресс-анализатор для определения гликозилированного гемоглобина, микроальбумина, креатин ина "ДСА Вантаж" (DCA Vantage) с принадлежностями	РУ № ФСЗ 2007/00973 "Сименс Хэлскеа Диагностикс Инк.", США	-	1 шт.* (при необходимо сти) или 2 шт.* (при необходимо сти)	-
2.1.51	Анализатор полуавтоматический Fineware™ FIA иммунофлуоресцентный для диагностики in vitro варианты исполнения FS-113, FS-205,	РУ № РЗН 2022/18037 "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт.* (при необходимо сти) или 2 шт.* (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости) или 2 шт. (при необходим ости)
	или Анализатор Getein1100 для количественного определения биомаркеров иммунофлуоресцентным методом	РУ № РЗН 2020/12609 "Гетеин Биотек, Инк.", Китай			
2.1.52	Анализатор мочи модель: Н-100 с принадлежностями	РУ № РЗН 2015/2490 "Дижуй Индастриал Ко., Лтд.", КНР	1 шт.* (при необходимо сти)	1 шт.* (при необходимо сти)	1 шт.* (при необходим ости)
	или Анализаторы мочи CL- 50 Plus, CL-500 с принадлежностями	РУ № РЗН 2016/3986 "Хай Текнолоджи, Инк.", США			
	или Анализатор мочи на тест полосках URiCKAH-strip с принадлежностями по ТУ 9443-034-59879815- 2012	РУ № РЗН 2013/761 ООО "Эйлитон", Россия			
	или	РУ № РЗН			

86567070.941149.001-01

Лист

49

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	Анализатор мочи URiSCAN, варианты исполнения: URiSCAN-Pro, URiSCAN-Optima	2021/15101, "УайДи Диагностикс КОРП.", Республика Корея			
2.1.53	Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи по ТУ 9437-013-52777873- 2014 Вариант исполнения: Укладка для оказания скорой медицинской помощи УМСП-02- «МЕДПЛАНТ» общепрофильная / специализированная (реанимационная).	РУ № РЗН 2015/2746 ООО "МЕДПЛАНТ" , Россия	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости)
2.1.54	Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437- 006-52777873-2010 варианты исполнения: - в пластиковом футляре- саквояже УМСП-01-П; - в пластиковом футляре- саквояже УМСП-01-Пм; - в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; - в металлическом футляре УМСП-01-М.	РУ № ФСР 2010/07335 ООО "МЕДПЛАНТ" , Россия	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости)
2.1.55	Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП- Д и КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007	РУ № ФСР 2007/00439 ООО "МЕДПЛАНТ" , Россия	1 шт.	1 шт.	1 шт.
	или Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом первой помощи по ТУ	РУ № ФСР 2010/08608, ООО "МИТК- М", Россия			

86567070.941149.001-01

Лист

50

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	9444-169-17493159-2002				
	или Аппарат искусственной вентиляции легких ручной полевой ДП-11 по 9В2.933.226ТУ	РУ № ФСР 2009/04397, АО "КАМПО", Россия			
	или Мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения в следующих исполнениях: - Мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения, неонатальный, - мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения, детский, - мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения, взрослый.	РУ № РЗН 2018/6725, ООО "Ассомедика" , Республика Беларусь			
2.1.56	Анализаторы гематологические автоматические "ГЕМАЛАЙТ" по ТУ 9443-011-74487176-2007 модель "ГЕМАЛАЙТ 1270"	РУ № ФСР 2007/00675 ООО "ДИКСИОН", Россия	1 шт. (при необходимо сти)	-	1 шт. (при необходим ости)
	или Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями варианты исполнения: MicroCC-18 MicroCC-20Plus.	РУ № ФСЗ 2010/07756 "Хай Текнолоджи, Инк.", США			
2.1.57	Штатив для пробирок универсальный ШПУ- «КРОНТ» по ТУ 9452- 037-11769436-2010	РУ № ФСР 2011/10034 АО "КРОНТ- М", Россия	2 шт. (при необходимо сти)	2 шт.	2 шт. (при необходим ости)
	или Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП по ТУ 9452-156-05519988-2006	РУ № ФСР 2011/11883 ООО "Полимерные изделия".			

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	варианты исполнения: Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-10; Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-20; Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-40.	Россия			
2.1.58	Центрифуга лабораторная медицинская настольная "Armed" варианты исполнения: LC-04A LC-04B HC-12C	РУ № РЗН 2020/10939 "Зенит Лаб (Цзянсу) Ко., Лтд.", Китай	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости)
	или Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118- 2017 с принадлежностями варианты исполнения: СМ-12, СМ-12М, ОПН-8М,	РУ № РЗН 2019/9166 ООО "ТАГЛЕР", Россия			
2.1.59	Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках и принадлежности к ним Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках: Отоскопы, модели: gi-score L	РУ № ФСЗ 2009/03905 "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия	1 шт. (при необходимо сти)	-	-
	или Прибор оптический диагностический: отоскоп с принадлежностями вариант исполнения: e-score	РУ № ФСЗ 2012/13250 "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия			
	или Отоскоп диагностический EliteVue	РУ № РЗН 2020/12957 "Рудольф Ристер			

86567070.941149.001-01

Лист

52

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
		ГмбХ", Германия			
2.1.60	Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 по ТУ 9442-001-39589405-2002	РУ № ФСР 2007/00471 ООО МРП "Техноаргус", Россия	1 шт. (при необходимо сти)	-	-
	или Набор пробных очковых линз и призм средний НС-277-01 по ТУ 9442-005-39589405-2002	РУ № ФСР 2007/00473 ООО МРП "Техноаргус", Россия			
2.1.61	Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 по ТУ 9442-002-39589405-2002	РУ № ФСР 2007/00950 ООО МРП "Техноаргус", Россия	1 шт. (при необходимо сти)	-	-
	или Проектор знаков экранный офтальмологический ТСР, с принадлежностями варианты исполнений: ТСР-2000, ТСР-2000 А, ТСР-3000 Р.	РУ № ФСЗ 2010/07992 "Томэй ГмбХ", Германия			
	или Проектор знаков ССР-3100	РУ № РЗН 2013/1168 "Хувитц Ко., Лтд", Корея			
	или Проектор знаков офтальмологический НСР-7000 с принадлежностями	РУ № ФСЗ 2011/09410 "Хувитц Ко., Лтд", Корея			
	или Проектор знаков экранный офтальмологический Stern, варианты исполнения Stern Opton, Stern Opton Plus по ТУ 32.50.13-001-52746973-2018	РУ № РЗН 2019/8092 ООО "СТЕРН", Россия			
2.1.62	Анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения	РУ № ФСР 2012/13976 ИП Гуров Андрей Сергеевич,	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	-

86567070.941149.001-01

Лист

53

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	компьютеризированный АПЗ-30/50/100- «ПЕРИТЕСТ» по ТУ 9442-002-11432330-2003	Россия			
	или Периметр автоматический офтальмологический АР- 3000 с принадлежностями	РУ № ФСЗ 2011/09934 "Томэй ГмбХ", Германия			
2.1.63	Светильники медицинские с принадлежностями, вариант исполнения: KaWe Masterlight	РУ № РЗН 2016/4777 "КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ", Германия	1 шт.	1 шт.	1 шт.
	или Светильники медицинские АРМЕД по ТУ 9452-005-13391002- 2014 вариант исполнения: - АРМЕД-ЛД-2-ЛЕД	РУ № РЗН 2016/4059, ООО "НПЦ МТ "АРМЕД", Россия			
	или Светильники передвижные "ЭМАЛЕД" в вариантах исполнения по ТУ 9452- 015-46655261-2011: - Светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100 П» (с блоком аварийного питания), - Светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100 П LT» (с блоком аварийного питания), - Светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100-01 П», - Светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100-01 П LT»	РУ № ФСР 2009/05897, ЗАО "Завод ЭМА", Россия			
2.1.64	Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями варианты исполнений: - Налобное зеркало ziegler,	РУ № ФСЗ 2012/12398 "Рудольф Ристер ГмбХ". Германия	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости)

86567070.941149.001-01

Лист

54

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	- Гибкий осветитель ri- magic LED, - Диагностический осветитель fortelux N, - Набор ri-light.				
2.1.65	Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, Дерматоскоп ri-derma	РУ № ФСЗ 2009/03906 "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия	1 шт. (при необходимо сти)	-	-
	или Дерматоскопы медицинские, с принадлежностями варианты исполнения, DELTA 20, DELTA 20 Plus,	РУ № РЗН 2014/2033 "Хайне Оптотехник ГмбХ и Ко., КГ", Германия			
	или Дерматоскопы и наборы диагностические: KaWe Piccolight D, KaWe Eurolight D 30 в комплекте	РУ № РЗН 2015/2924 "КИРХНЕР ЭНД ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ", Германия			
2.1.66	Столик манипуляционный СМ - «МСК» по ТУ 9451-022- 52962725-2008 в следующем исполнении: СМ548-«МСК» - СМ548- «МСК» (МСК-548) - столик манипуляционный передвижной металлический, на колесах, с двумя полками из нержавеющей стали и выдвижным ящиком	РУ № ФСР 2008/02802 ООО "Медсталькон струкция", Россия	-	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости)
2.1.67	Столики медицинские инструментальные, вариант исполнения: Столик медицинский инструментальный СИ- 07	РУ № ФСЗ 2012/11706 ПУП "Ратон- МедТех", Республика Беларусь	-	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости)
2.1.68	Кольпоскоп ЭКС-1М с принадлежностями	РУ № ФСЗ 2010/07705 ООО "НПП	1 шт. (при необходимо	-	-

86567070.941149.001-01

Лист

55

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
		ЭКОМП", Беларусь	сти)		
	или Кольпоскопы напольные бинокулярные КН6-02- "Зенит" и КН6-03- "Зенит" по ТУ 9442-004- 07526142-2006	РУ № ФСР 2007/00118 ПАО "КМЗ", Россия			
2.1.69	Динамометры кистевые четырёх типоразмеров: ДК-25, ДК-50, ДК-100 и ДК-140 по ТУ 64-1-3842- 84	РУ № ФСР 2008/02239 ЗАО "Нижнетагиль- ский медико- инструментал- ьный завод", Россия	2 шт. (при необходимо- сти)	-	-
	или Динамометры медицинские электронные ручные ДМЭР-30, ДМЭР-90, ДМЭР-120 по ТУ 9441- 035-00226454-2007	РУ № ФСР 2008/02492 АО "ТВЕС", Россия			
2.1.70	Прибор для определения оксида углерода в выдыхаемом воздухе АНКАТ-7635Smokerlyzer по ИБЯЛ.941439.001 ТУ	РУ № РЗН 2014/1722 ФГУП "Смоленское производстве- нное объединение "Аналитприбо- р", Россия	1 шт. (при необходимо- сти)	-	-
2.1.71	Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 по ТУ 9443- 166-07502348-2005	РУ № ФСР 2010/08206 АО "ЛОМО", Россия	1 шт. (при необходимо- сти)	-	-
	или Микроскоп биологический Биолаб для лабораторной диагностики in vitro, вариант исполнения: Микроскоп биологический Биолаб 5 для лабораторной диагностики in vitro	РУ № РЗН 2022/17987 "Нинбо Тичинг Инструмент Ко., Лтд.", Китай			
2.1.72	Термоконтёйнеры переносные для кратковременного	РУ № РЗН 2013/617 ООО	1 шт.* (при необходимо	1 шт.* (при необходимо	1 шт.* (при необходим

86567070.941149.001-01

Лист

56

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	хранения крови, кровезаменителей и биопрепаратов ТМ- «МОКА» Варианты исполнения: ТМ4; ТМ6; ТМ9; ТМ16; ТМ25; ТМ32; ТМ50	"МОКА" (ООО "Мока"), Россия	сти)	сти)	ости)
	или Термоконтейнеры многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток и других лекарственных средств ТМ-"ТЕРМО- КОНТ МК" по ТУ 9452- 005-13549456-2012 Варианты исполнения: ТМ-1, ТМ-5, ТМ-8, ТМ- 20, ТМ-35, ТМ-52, ТМ- 80.	РУ № ФСР 2008/03885 ООО "Термо- Конт МК", Россия			
2.1.73	Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435- 296-07610776-2011	РУ № ФСР 2007/00268, Открытое акционерное общество "Медико- инструментал ьный завод имени В.И. Ленина", Россия	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	-
	или Инструменты медицинские многоповерхностного воздействия (зажимные), с принадлежностями	РУ № ФСЗ 2012/12517, "Саммар Интернешен", Пакистан			
2.1.74	Ножницы медицинские по ТУ 32.50.13-003- 39241292-2022	РУ № РЗН 2023/20444, ООО "МИЗ- ТУМБОТИН О", Россия	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	-
	или Инструменты режущие по ТУ 9433-285- 07613444-2010	РУ № ФСР 2010/07370, ОАО "МИЗ им. М.Горького", Россия			

86567070.941149.001-01

Лист

57

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	или Инструменты медицинские хирургические режущие	РУ № ФСЗ 2008/02888, "СУРДЖИВЕ ЛЛ", Пакистан			
2.1.75	Лотки металлические медицинские ЛММ- «МЕДИКОН» по ТУ 9452-001-27846954-2008	РУ № ФСР 2008/03233, ООО "НПФ "МЕДИКОН", Россия	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	-
	или Лоток полимерный почкообразный, с крышкой, ручкой и носином для слива ЛПпо-1,75-ЕЛАТ" по ТУ 9398-007-24320270-2004	РУ № ФСР 2007/00130, АО "ЕПЗ", Россия			
2.1.76	Дозаторы пипеточные "ЭКРОС" и "ЭКОХИМ" по ТУ 9452-046- 23050963-2007 варианты исполнения: ЭКРОС - ОФ (вид 124480); ЭКРОС - ОП (вид 124480); ЭКРОС - МП (вид 124540); - ЭКОХИМ - ОФ (вид 124480); ЭКОХИМ - ОП (вид 124480); - ЭКОХИМ - МП (вид 124540); ЭКОХИМ - ОФА (вид 124480); ЭКОХИМ - ОПА (вид 124480).	РУ № РЗН 2015/2668, ООО "ЭКРОСХИМ ", Россия	2 шт. (при необходимо сти)	2 шт. (при необходимо сти)	2 шт. (при необходим ости)
	и/или Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объемами доз, одно- и многоканальные "Колор" по ТУ 9452-002- 33189998-2007	РУ № ФСР 2007/01430, АО "Термо Фишер Сайентифик", Россия			
	и/или Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, "Техно" по ТУ 9443-009- 33189998-2009	РУ № ФСР 2009/06508, АО "Термо Фишер Сайентифик",			
			86567070.941149.001-01		
			Лист		
			58		

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
		Россия			
2.2	Расходные медицинские изделия:				
2.2.1	Набор реагентов для быстрого количественного определения сердечного тропонина I (сTn I) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Fineware™ FIA для диагностики in vitro (сTn I Rapid Quantitative Test)	РУ № РЗН 2022/17581 "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)
2.2.2	Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (DD) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Fineware™ FIA для диагностики in vitro (D-Dimer Rapid Quantitative Test)	РУ № РЗН 2022/17523 "Гуанчжоу Вондфо Байотек Ко., Лтд.", Китай	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)
2.2.3	Набор реагентов для быстрого количественного определения N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Fineware™ FIA для диагностики in vitro (NT-proBNP Rapid Quantitative Test)	РУ № РЗН 2022/16838, "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)
2.2.4	Набор реагентов для быстрого количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Fineware™ FIA для диагностики in vitro (HbA1c Rapid Quantitative Test)	РУ № РЗН 2022/16827 "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)
2.2.5	Набор реагентов для	РУ № РЗН	1 компл.	1 компл.	1 компл.
			86567070.941149.001-01		
			Лист		
			59		

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	быстрого количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Fineware FIA для диагностики in vitro (PCT Rapid Quantitative Test)	2022/16845 "Гуанчжоу Вондфо Биотек Ко., Лтд.", Китай	(при необходимо сти)	(при необходимо сти)	(при необходим ости)
2.2.6	Набор реагентов для быстрого количественного определения тиреотропного гормона (TSH) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Fineware™ FIA для диагностики in vitro (TSH Rapid Quantitative Test)	РУ № РЗН 2022/17525 "Гуанчжоу Вондфо Байотек Ко., Лтд.", Китай	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходим ости)
2.2.7	Набор реагентов для количественного определения сердечного тропонина I (сTnI) иммунофлуоресцентным методом	РУ № РЗН 2020/11565 "Гетеин Биотек, Инк.", Китай	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходим ости)
2.2.8	Набор реагентов для количественного определения сердечного изофермента креатинкиназы, тропонина I, миоглобина (CK-MB/cTnI/Myo) иммунофлуоресцентным методом	РУ № РЗН 2020/11493 "Гетеин Биотек, Инк.", Китай	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходим ости)
2.2.9	Набор реагентов для количественного определения N- терминального мозгового натрийуретического пептида типа B (NT- proBNP) иммунофлуоресцентным методом	РУ № РЗН 2021/13774 "Гетеин Биотек, Инк.", Китай	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходим ости)
2.2.10	Набор для быстрого количественного определения С-	РУ № РЗН 2022/16802 "Гетеин	1 компл. (при необходимо	1 компл. (при необходимо	1 компл. (при необходим

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	реактивного белка (hs-CRP+CRP) (в сыворотке, плазме и цельной крови человека) иммунофлуоресцентным методом (hs-CRP+CRP FastTestKit)	Биотек, Инк.", Китай	сти)	сти)	ости)
2.2.11	Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом (PCT Fast Test kit (Immunofluorescence Assay))	РУ № РЗН 2022/16697 "Гетеин Биотек, Инк.", Китай	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)
2.2.12	Набор реагентов для количественного определения D - димера (D - dimer) иммунофлуоресцентным методом (D-dimer Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay))	РУ № РЗН 2022/16615 "Гетеин Биотек, Инк.", Китай	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)
2.2.13	Набор для быстрого определения антигена SARS-CoV-2 (в мазках из носоглотки и ротоглотки) иммунофлуоресцентным методом (SARS-CoV-2 Antigen Fast Test Kit)	РУ № РЗН 2022/18079 "Гетеин Биотек, Инк.", Китай	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)
2.2.14	Реагенты и расходные материалы к экспресс-анализаторам для определения гликозилированного гемоглобина, микроальбумина, креатинина "ДСА 2000" (DCA 2000), "ДСА Вантаж" (DCA Vantage)	РУ № ФСЗ 2007/00974 "Сименс Хэлскеа Диагностика Инк.", США	-	1 компл. (при необходимости)	-
2.2.15	Реагенты для биохимического анализатора SPOTCHEM	РУ № ФСЗ 2007/00751 "АРКРЭЙ Фэктори, Инк.", Япония	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)
2.2.16	Материалы расходные для биохимического анализатора SPOTCHEM	РУ № ФСЗ 2007/00750 "АРКРЭЙ	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)	1 компл. (при необходимости)
86567070.941149.001-01					Лист
					61

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
		Фэктори, Инк.", Япония	сти)	сти)	ости)
2.2.17	Тест-полоски для биохимического анализатора SPOTCHEM	РУ № РЗН 2015/2385 "АРКРЭЙ Фэктори, Инк.", Япония	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходим ости)
2.2.18	Набор тест-полосок для in vitro диагностики для количественного определения биохимических показателей в сыворотке или плазме крови на анализаторах биохимических SPOTCHEM	РУ № РЗН 2023/21222 "АРКРЕЙ Фэктори, Инк.", Япония	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходим ости)
2.2.19	Тест-полоски и контрольные растворы для анализатора крови портативного биохимического EasyTouch	РУ № ФСЗ 2012/11677 Биоптик Технолоджи, Инк., Тайвань	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходим ости)
2.2.20	Тест-полоски "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active)	РУ № ФСЗ 2008/01205 "Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Германия	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходим ости)
2.2.21	Тест-полоски и контрольные растворы для экспресс- анализаторов биохимических портативных «Аккутренд»	РУ № ФСЗ 2010/06626 "Рош Диагностикс ГмбХ", Германия	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходим ости)
2.2.22	Реагенты диагностические к анализаторам мочи моделей Н-50, Н-100, Н- 300, Н-500, Н-800	РУ № ФСЗ 2010/08127 "Дижуй Индастриал Ко., Лтд.", Китай	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходим ости)
2.2.23	Тест-полоски URISCAN для анализаторов мочи URISCAN PRO, URISCAN OPTIMA	РУ № ФСЗ 2010/07858, "ЕД Диагностикс КОРП.", Республика Корея	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходим ости)
2.2.24	Тест-полоски	РУ № РЗН	1 компл.	1 компл.	1 компл.

86567070.941149.001-01

Лист

62

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	URiSCAN® для анализа состава и свойств мочи	2023/20860, "УайДи Диагностикс КОРП.", Республика Корея	(при необходимо сти)	(при необходимо сти)	(при необходим ости)
2.2.25	Набор реагентов "УНИГЕМ" для анализатора гематологического MicroCC-20Plus по ТУ 21.20.23-001-44619717- 2020	РУ № РЗН 2022/18968 ООО "ВЕЛМА- ТЕСТ", Россия	1 компл. (при необходимо сти)	-	1 компл. (при необходим ости)
2.2.26	Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче УРИГЛЮК-1 по ТУ 21.20.23-001- 45677786-2018	РУ № ФСР 2011/11001 ООО "Биосенсор АН", Россия	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходимо сти)	1 компл. (при необходим ости)
	или Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетонových тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786- 2018 Вариант исполнения: Тест- полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения; глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетонových тел, pH, билирубина, уробилиногена,	РУ № ФСР 2008/02809 ООО "Биосенсор АН", Россия			

86567070.941149.001-01

Лист

63

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11А				
	или Полоски индикаторные для определения скрытой крови, кетонов, глюкозы, белка, pH в моче БИОСКАН-ПЕНТА по ТУ 9398-006- 33020495-2006	РУ № ФСР 2012/13016 ООО "БИОСКАН", Россия			
2.2.27	Набор реагентов для иммунохроматографичес кого выявления скрытой крови в кале человека (ИммуноХром-ГЕМ- Экспресс) по ТУ 9398- 011-53915567-2005	РУ № ФСР 2010/06858 ООО "МЕД- ЭКСПРЕСС- ДИАГНОСТИ КА", Россия	1 компл. (при необходимо сти)	-	-
2.2.28	Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный "Ева" по ТУ 9437-045-44942795-2009	РУ № ФСР 2010/07047 ООО "Полимерные изделия", Россия		-	-
	или Наборы гинекологические "Юнона" (ТУ РБ 300046934.010-2002)	РУ № ФСЗ 2012/12751 ЗАО "Медицинско е предприятие Симург", Республика Беларусь			
2.2.29	Роторасширитель винтовой одноразовый	РУ РЗН 2021/13297 "Сямынь Компауэр Медикал Тек. Ко., Лтд.", Китай	1 шт. (при необходимо сти)	-	-
2.2.30	Наборы для анестезиологии и реанимации	РУ № ФСЗ 2009/05211 "Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед", США	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходимо сти)	1 шт. (при необходим ости)
	или Набор одноразовый для	РУ № РЗН 2023/20321			

86567070.941149.001-01

Лист

64

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
	устранения асфиксии (коникотомии) по ТУ 32.50.13-002-35453034- 2017	ООО "НОВОПЛАС Т-М" Россия			
2.2.31	Набор проктологический одноразовый стерильный "ЕваПро" по ТУ 9437- 068-44942795-2012	ПУ № РЗН 2013/917 ООО "Полимерные изделия", Россия	1 компл. (при необходимо сти)	-	-
3	Системы жизнеобеспечения и вспомогательное оборудование	Согласно п.1.15.2 ТУ 29.10.59- 017-86567070- 2023	1 компл.	1 компл.	1 компл.
3.1	Система отопления:				
3.1.1	Электрический обогреватель	Максимальна я потребляемая мощность не более 2 кВт, мощность обогрева не менее 1 кВт	3 шт.	3 шт.	3 шт.
3.1.2	Электрический обогреватель	Максимальна я потребляемая мощность не более 1 кВт, мощность обогрева не менее 0,5 кВт	1 шт. при необходимо сти или 2 шт. при необходимо сти	1 шт. при необходимо сти или 2 шт. при необходимо сти	1 шт. при необходим ости или 2 шт. при необходим ости
3.1.3	Тепловая воздушная завеса	Максимальна я потребляемая мощность не более 3 кВт, тепловая мощность не менее 2,0 кВт	1 шт.	1 шт.	1 шт.
3.1.4	Автономный отопитель	Максимальна я потребляемая мощность не более 80 Вт, теплопроизво дительность не менее 1 кВт	1 шт.	1 шт.	1 шт.

86567070.941149.001-01

Лист

65

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
3.1.5	Автономный отопитель	Максимальная потребляемая мощность не более 80 Вт, теплопроизводительность не менее 1 кВт	1 шт. при необходимости	1 шт. при необходимости	1 шт. при необходимости
3.2	Система вентиляции:				
3.2.1	Приточная фильтро- вентиляционная установка	Максимальная потребляемая мощность не более 3 кВт, производительность по потoku воздуха не менее 50 м ³ /ч	1 шт.	1 шт.	1 шт.
3.3	Система кондиционирования:				
3.3.1	Сплит-система	Максимальная потребляемая мощность не более 3 кВт, общая холодопроизводительность не менее 2 кВт	1 компл.	1 компл.	1 компл.
3.4	Система электроснабжения:				
3.4.1	автономный генератор	Выходная мощность от 2-х до 16-ти кВт, параметры выходного напряжения 220/380 В, 50 Гц	1 шт.	1 шт.	1 шт.
3.4.2	преобразователь напряжения бортовой сети	Максимальная потребляемая мощность не более 4 кВт, форма	1 шт.	1 шт.	1 шт.

86567070.941149.001-01

Лист

66

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
		выходного напряжения - синусоидальн ая			
3.4.3	зарядное устройство для аккумулятора	Совмещен в одном корпусе с преобразовате лем напряжение или в отдельном корпусе. Максимальна я потребляемая мощность не более 2 кВт, зарядный ток не менее 15/30 А	1 шт.	1 шт.	1 шт.
3.4.4	3-х проводной изолированный электрический кабель (с многожильными медными проводами)	Длина не менее 30 м, изоляция, сечение медного провода не менее 10 мм ²	1 шт.	1 шт.	1 шт.
3.4.5	Однопроводной электрический кабель заземления (с многожильным медным проводом)	Длина не менее 30 м, сечение медного провода не менее 10 мм ²	1 шт.	1 шт.	1 шт.
3.4.6	Источник бесперебойного питания	Максимальна я потребляемая мощность не более 1 кВт, активная выходная мощность не менее 8 кВт	1 шт. при необходи мости	1 шт. при необходи мости	1 шт. при необходи мости
3.4.7	Стабилизатор напряжения	Номинальное выходное напряжение 220В±5%, номинальная мощность нагрузки не	1 шт. при необходи мости	1 шт. при необходи мости	1 шт. при необходи мости

86567070.941149.001-01

Лист

67

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
		более 5 кВт			
3.5	Система освещения	Максимальная потребляемая мощность не более 1 кВт	1 компл.	1 компл.	1 компл.
3.6	Система водоснабжения:				
3.6.1	Водонагреватель	Максимальная потребляемая мощность не более 2 кВт, объем бака для воды не менее 3 л	1 компл. при необходимости (в медицинских или служебном помещении (санузле) при его наличии)	1 компл. при необходимости (в медицинских или служебном помещении (санузле) при его наличии)	1 компл. при необходимости (в медицинских или служебном помещении (санузле) при его наличии)
3.6.2	Биотуалет	Объем сточного бака не менее 10 л	1 шт. (при наличии служебного помещения (санузла))	1 шт. (при наличии служебного помещения (санузла))	1 шт. (при наличии служебного помещения (санузла))
3.7	Система пожарной сигнализации и пожаротушения:				
3.7.1	Извещатель пожарный дымовой/ загазованности СО	Автономное устройство, максимальная потребляемая мощность не более 50 Вт от собственного источника питания	1 компл.	1 компл.	1 компл.
3.7.2	Огнетушитель	Порошковый или углекислотный, объемом не менее 2л	2 шт.	2 шт.	2 шт.
3.8	Средства связи	Автономное устройство, Ёмкость аккумулятора не ниже 600 мА*ч	1 компл.	1 компл.	1 компл.
3.9	Видеорегистратор	Максимальная	1 шт.	1 шт.	1 шт.

86567070.941149.001-01

Лист

68

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
		я потребляемая мощность не более 120 Вт, качество разрешения записи не ниже уровня 1280x720 (HD)	при необходи мости	при необходи мости	при необходи мости
3.10	Беспроводной маршрутизатор	Автономное устройство, максимальная потребляемая мощность не более 120 Вт, не менее 1 1 порта/разъема	1 шт. при необходи мости	1 шт. при необходи мости	1 шт. при необходи мости
3.11	Рабочее место врача (фельдшера) с персональным компьютером и выходом в информа-ционно-коммуникационную сеть «Интернет» и (или) рабочее место акушера (медицин-ской сестры) с персональным компьютером и выходом в информа-ционно-коммуникационную сеть «Интернет»	максимальная потребляемая мощность не более 2 кВт, объем накопителя не менее 128 ГГб	1 компл. при необходимо сти	1 компл. при необходимо сти	1 компл. при необходим ости
4	Мебель				
4.1	Рабочий стол	-	3 шт.	3 шт.	3 шт.
4.2	Рабочий стол	-	1 шт. (при необходи- мости)	1 шт. (при необходи- мости)	1 шт. (при необходи- мости)
4.3	Шкаф	-	3 шт.	3 шт.	3 шт.
4.4	Шкаф	-	1 шт. (при необходи- мости)	1 шт. (при необходи- мости)	1 шт. (при необходи- мости)
4.5	Банкетка	-	1 шт.	1 шт.	1 шт.
4.6	Стул	-	3 шт.	3 шт.	3 шт.

86567070.941149.001-01

Лист

69

Таблица 5

№	Наименование	Обозначение технической документации	Кол-во для варианта исполнения 1	Кол-во для варианта исполнения 2	Кол-во для варианта исполнения 3
4.7	Табурет	-	3 шт. (при необходи- мости)	3 шт. (при необходи- мости)	3 шт. (при необходи- мости)
5	Эксплуатационная документация				
5.1	Руководство по эксплуатации	МЛПМ «Диагностика»	1 шт.	1 шт.	1 шт.
5.2	Технический паспорт	МЛПМ «Диагностика»	1 шт.	1 шт.	1 шт.

86567070.941149.001-01

Лист

70

8 РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ (МАРКИРОВКИ) НА КОМПЛЕКСЕ

Обозначение	Описание	Место расположения
	Внимание! Обратитесь к эксплуатационной документации	Снаружи фургона, в нижней части левого борта. Внутри фургона около основных элементов систем жизнеобеспечения.
	Обозначение расположения зажима защитного заземления	Снаружи фургона, в нижней части левого борта
	Обозначение расположения разъема подключения к внешней сети.	Снаружи фургона, в нижней части левого борта

Маркировка Модуля соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, и содержит:

- наименование и/или логотип, товарный знак предприятия-изготовителя,
- контактная информация предприятия-изготовителя (телефон, адрес электронной почты, адрес сайта предприятия-изготовителя в сети Интернет (при наличии))
- наименование медицинского изделия,
- вариант исполнения
- серийный номер медицинского изделия,
- номинальное питающее напряжение,
- частота питающего напряжения,
- потребляемая мощность,
- год изготовления медицинского изделия (или последние две цифры),
- обозначение технических условий.

Наружные поверхности каждого МЛПМ, знаки и надписи должны соответствовать ГОСТ 28385 и ГОСТ 19715.

Маркировка входящих в комплект Модуля покупных изделий должна соответствовать сопроводительной документации на эти изделия.

C

9 УТИЛИЗАЦИЯ

Модуль по истечении срока службы, а также в случае, когда восстановление и ремонт становятся нерентабельными, подлежит уничтожению в соответствии с отходами класса А по СанПиН 2.1.3684-21.

Модуль снабжен специальным оборудованием для сбора и хранения медицинских отходов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, включая цветовые обозначения данного оборудования.

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие Модуля требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации Модуля – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при общем пробеге за этот период не более 60 000 км.

Гарантийный срок эксплуатации и наработка на базовое шасси, двигатель, шины, аккумуляторные батареи и лампы накаливания даются предприятиями-изготовителями в соответствии с утвержденными на них стандартами и ТУ.

Использование Модуля не по назначению, а также эксплуатация его с нарушением указаний руководства по эксплуатации и внесение каких-либо конструкторских изменений без согласования с разработчиком конструкторской документации, не разрешаются.

В случае невыполнения указанных условий предприятие-изготовитель рекламаций от потребителя не принимает и претензии не рассматривает.

11 ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2022 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик»;

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учётом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания»;

ГОСТ Р 56328-2014 «Изделия медицинские. Подвижные (передвижные) комплексы медицинского назначения. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ 28385-89 «Комплексы медицинского назначения передвижные (подвижные) на автомобильных шасси. Цветографические схемы, опознавательные знаки. Технические требования».

86567070.941149.001-01

Лист

75

12 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ компоновок помещений и схемы внешнего вида

Схема внешнего вида
вариантов исполнения 1, 2, 3
на базе БТС 57561Z, 57550Z, 57552Z, 57530Z
(компоновки помещений № 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2)


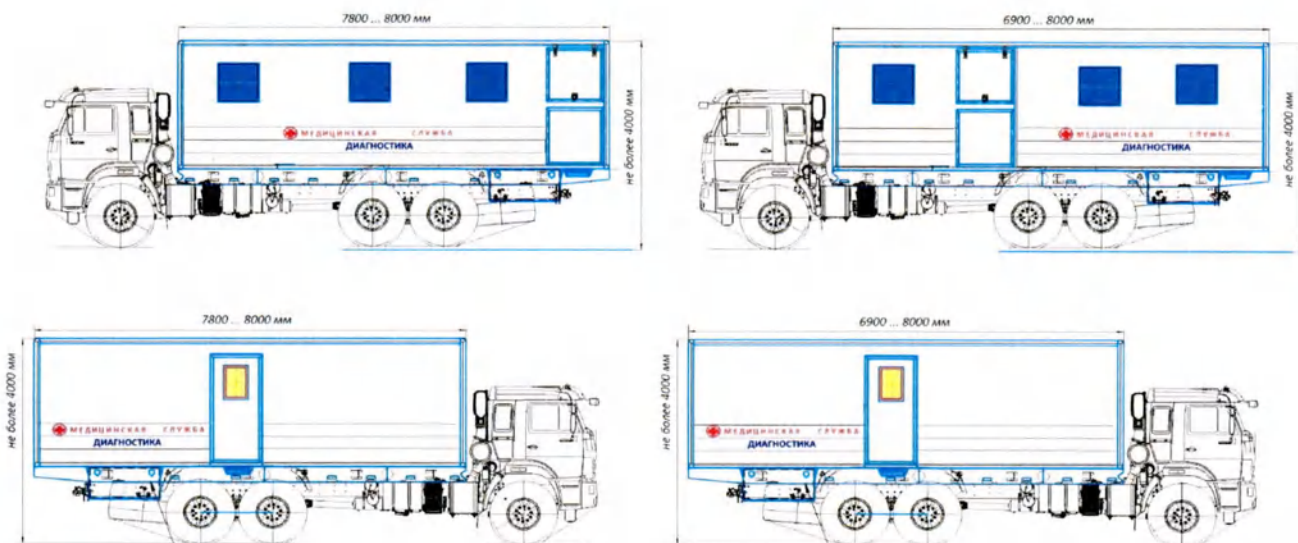


Схема внешнего вида
вариантов исполнения 1, 2, 3
на базе БТС 47195Z, 47193Z
(компоновки помещений № 1.2, 1.3, 2.2, 3.2)

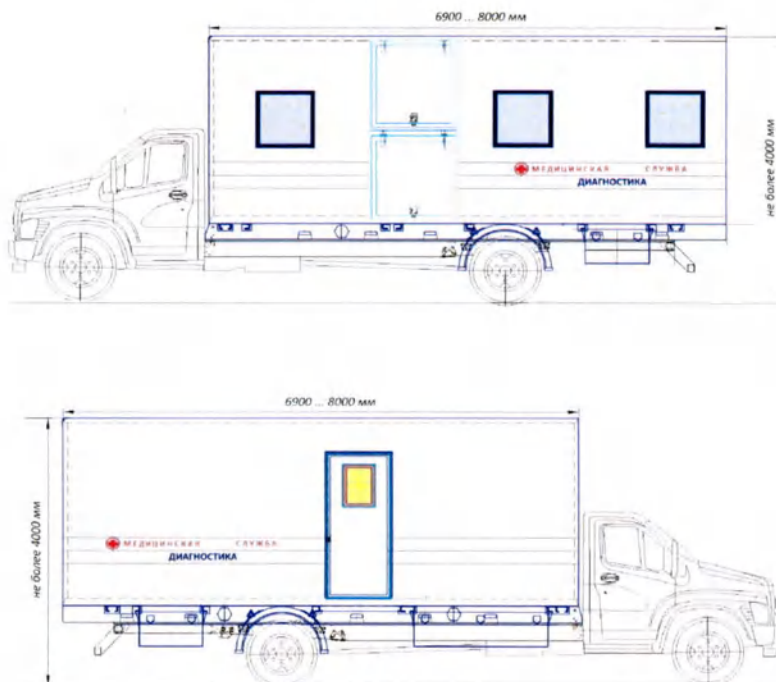


86567070.941149.001-01

Лист

76

Схема внешнего вида
вариантов исполнения 1, 2, 3
на базе БТС 87528Z, 87551Z, 87578Z
(компоновки помещений № 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2)

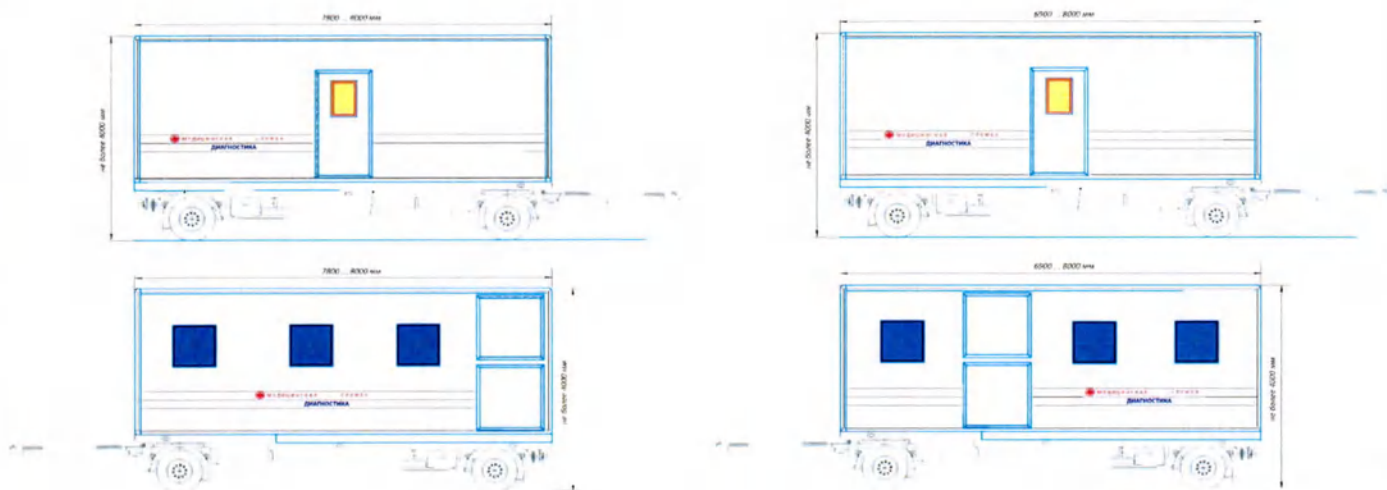

86567070.941149.001-01

Лист

77

**Компоновки помещений
и размещение основных элементов оснащения
МЛПМ «Диагностика»:**

№ компоновки помещений и размещения основных элементов оснащения	Описание компоновки помещений и размещения основных элементов оснащения
1.1	Компоновка помещений и размещение основных элементов оснащения МЛПМ «Диагностика», вариант исполнения 1 на базе БТС 57561Z, 57550Z, 57552Z, 57530Z, 87528Z, 87551Z, 87578Z
1.2	Компоновка помещений и размещение основных элементов оснащения МЛПМ «Диагностика», вариант исполнения 1 на базе БТС 57561Z, 57550Z, 57552Z, 57530Z, 47195Z, 47193Z, 87528Z, 87551Z, 87578Z
1.3	
2.1	Компоновка помещений и размещение основных элементов оснащения МЛПМ «Диагностика», вариант исполнения 2 на базе БТС 57561Z, 57550Z, 57552Z, 57530Z, 87528Z, 87551Z, 87578Z
2.2	Компоновка помещений и размещение основных элементов оснащения МЛПМ «Диагностика», вариант исполнения 2 на базе БТС 57561Z, 57550Z, 57552Z, 57530Z, 47195Z, 47193Z, 87528Z, 87551Z, 87578Z
3.1	Компоновка помещений и размещение основных элементов оснащения МЛПМ «Диагностика», вариант исполнения 3 на базе БТС 57561Z, 57550Z, 57552Z, 57530Z, 87528Z, 87551Z, 87578Z
3.2	Компоновка помещений и размещение основных элементов оснащения МЛПМ «Диагностика», вариант исполнения 3 на базе БТС 57561Z, 57550Z, 57552Z, 57530Z, 47195Z, 47193Z, 87528Z, 87551Z, 87578Z

Примечание 1:

Общие используемые обозначения:

МП – медицинское помещение

СП – служебное помещение


ТП – техническое помещение

Примечание 2:

Нумерация элементов оснащения компоновок помещений соответствует нумерации элементов оснащения раздела 1.15 «КОМПЛЕКТНОСТЬ» настоящих Технических условий.

Примечание 3:


Допустимые отклонения линейных и угловых размеров во всех приведенных х компоновках помещений МЛПМ «Диагностика» не более $\pm 5\%$.

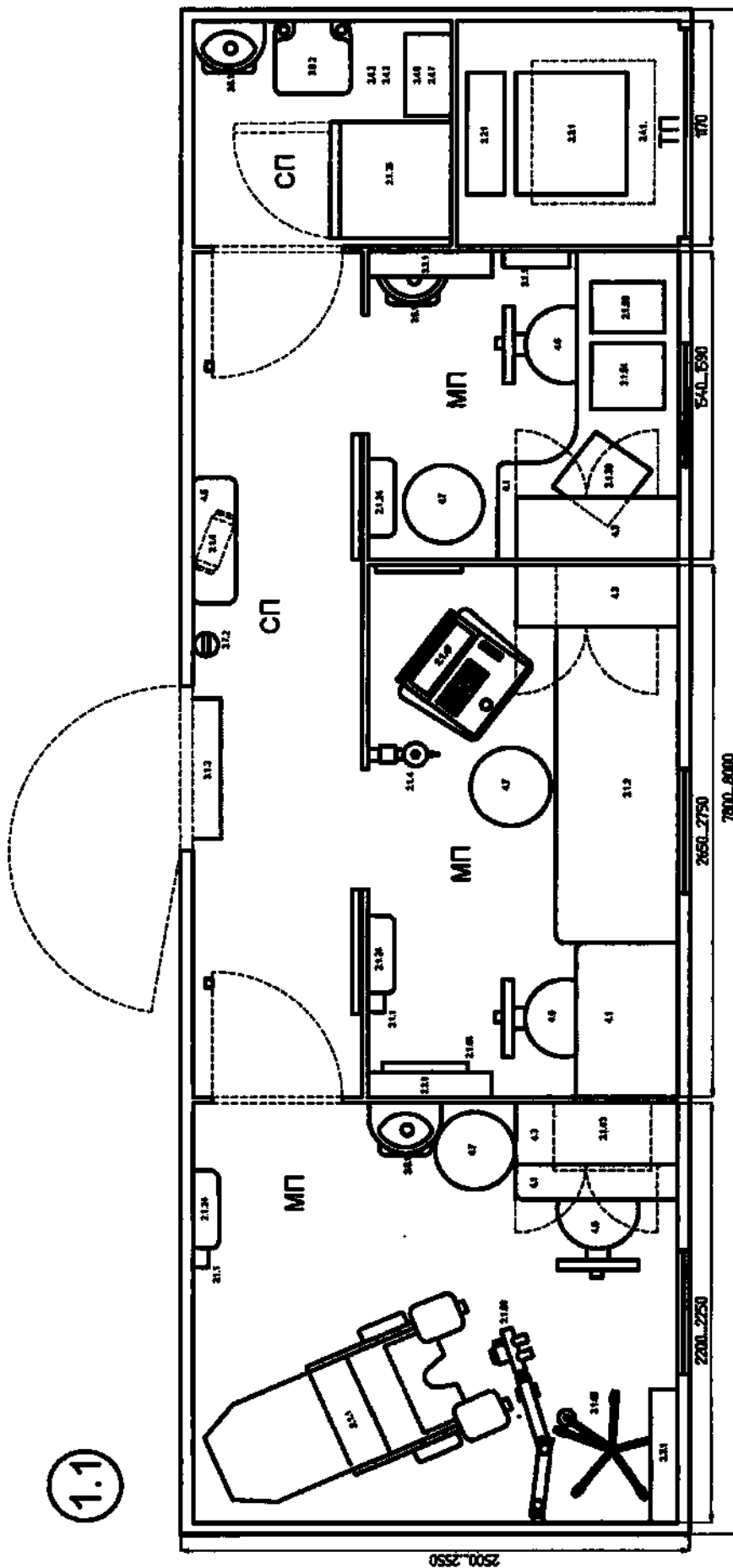


86567070.941149.001-01

Лист


79

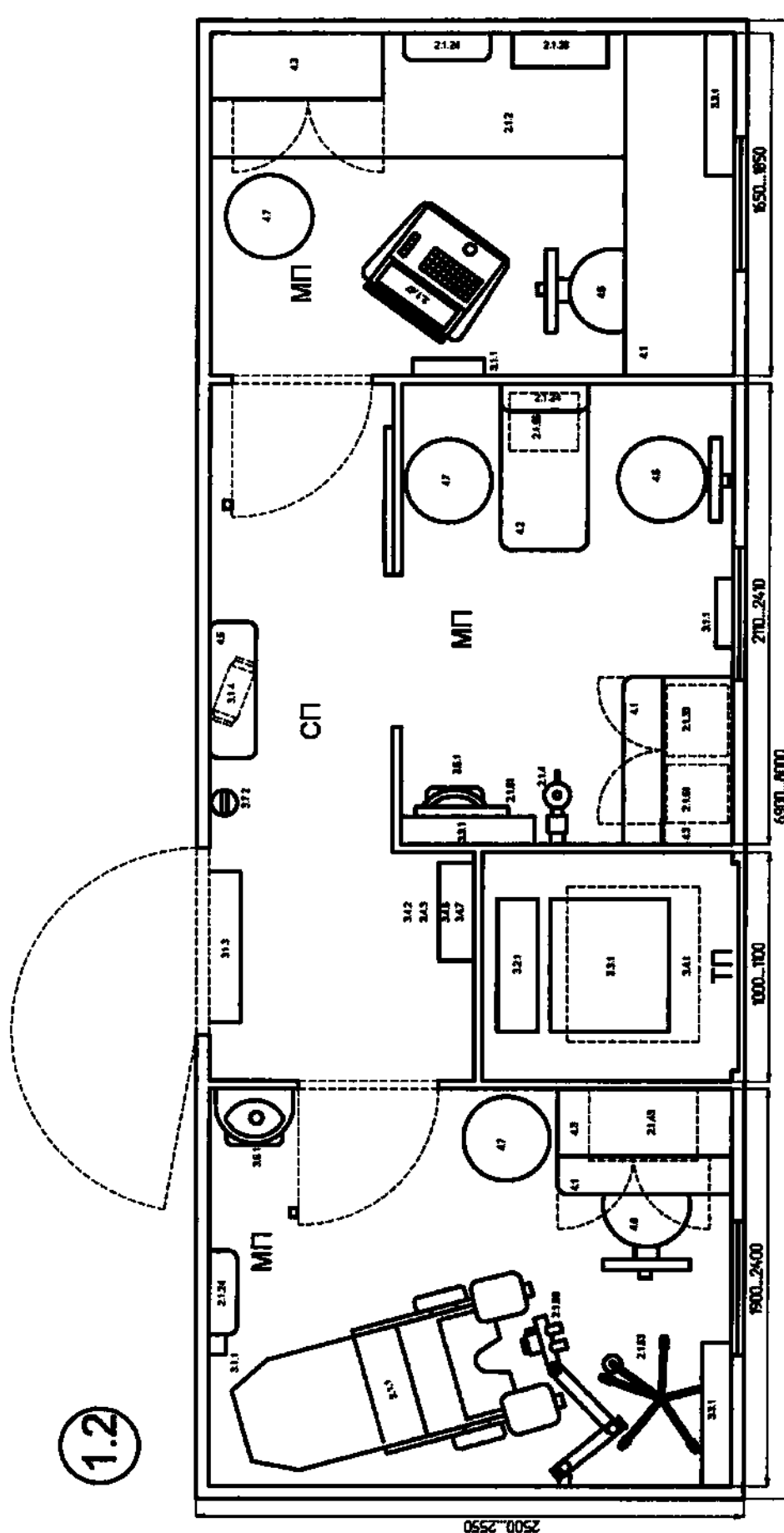

86567070.941149.001-01

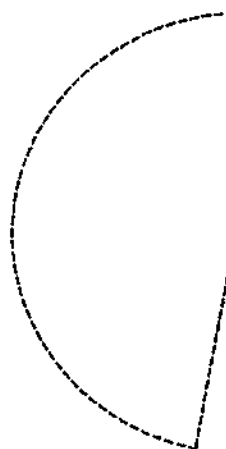

1.3

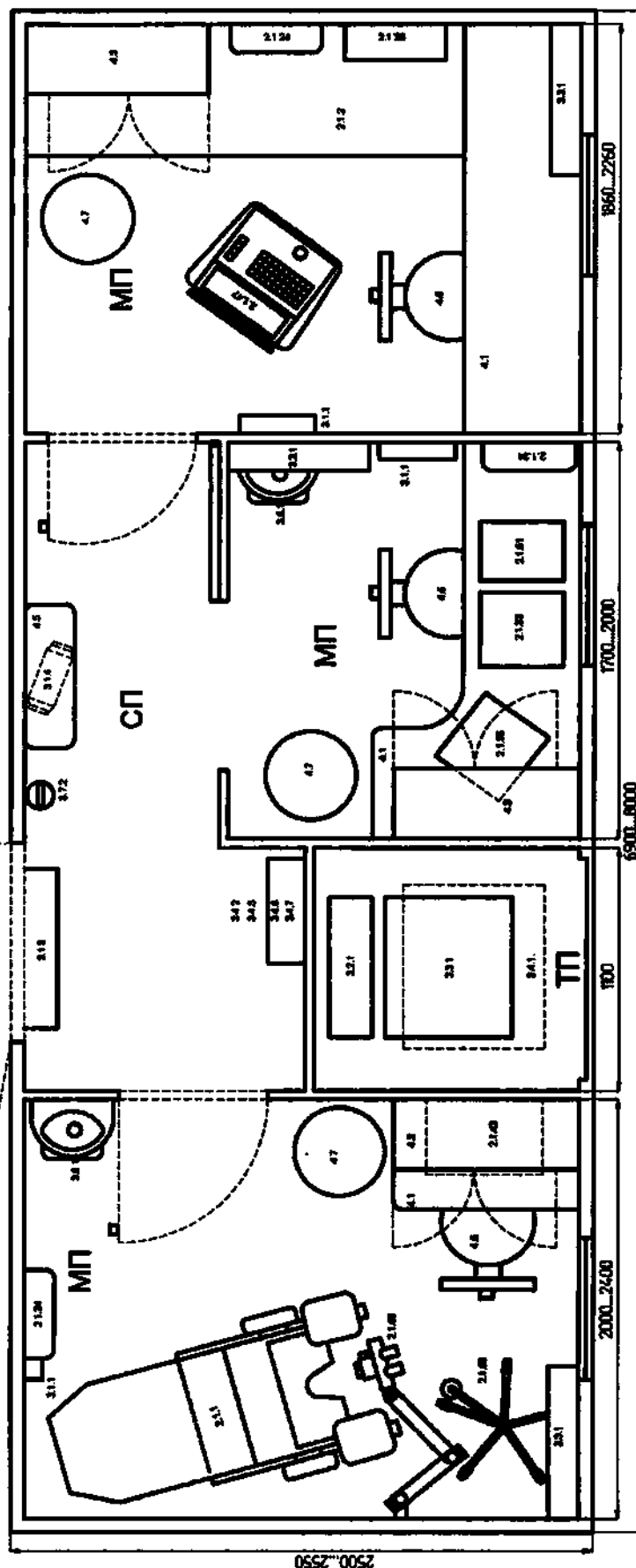


86567070.941149.001-01

Лист

81

2.1

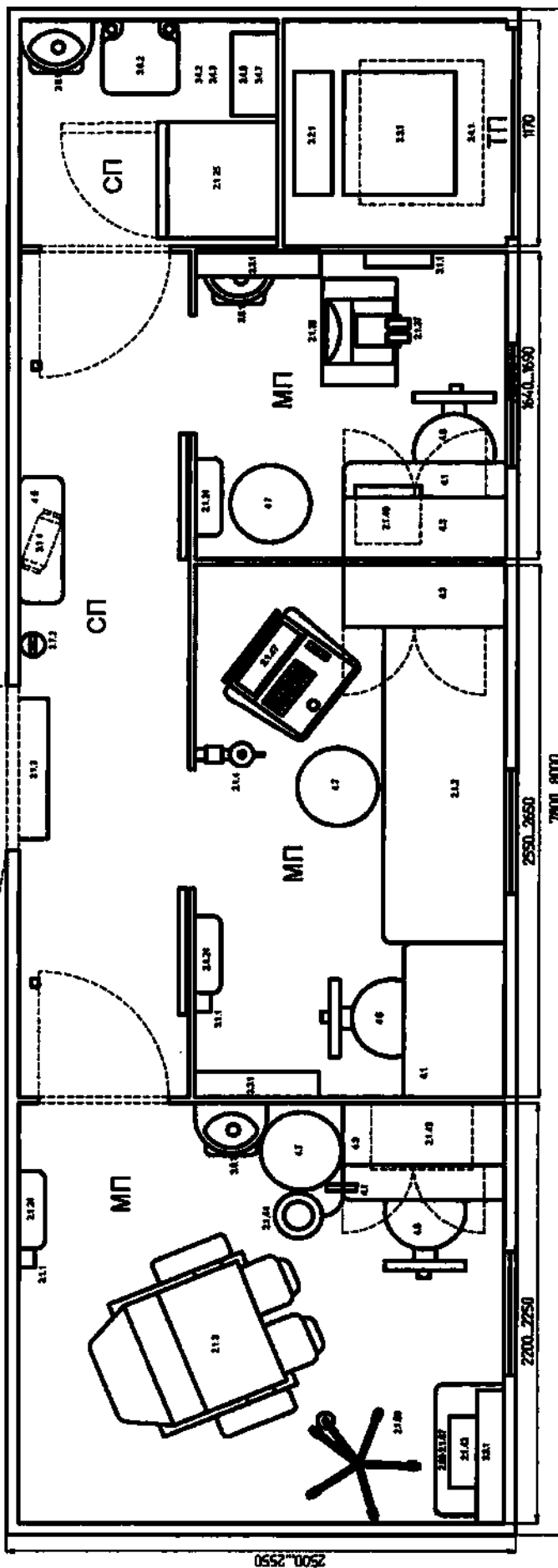


0552*0052

86567070.941149.001-01

Лист

82

2.2

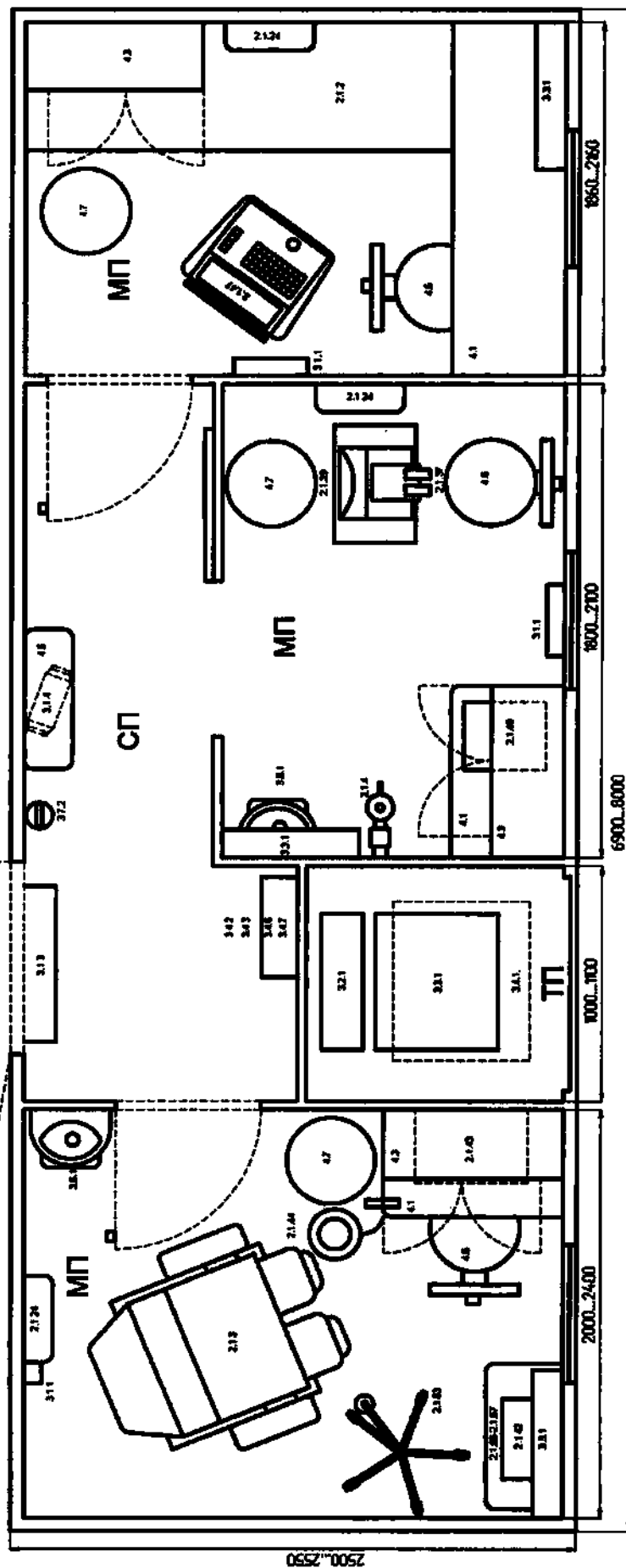


86567070.941149.001-01


Лист

83

3.1

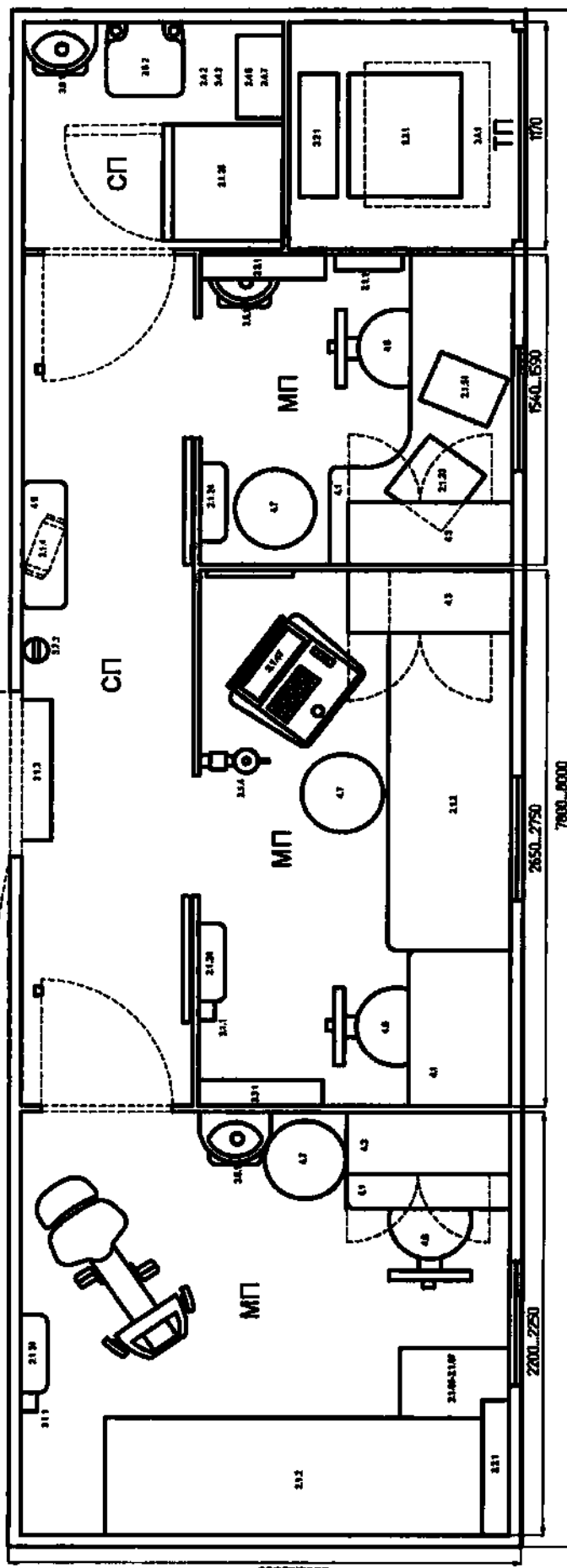

86567070.941149.001-01

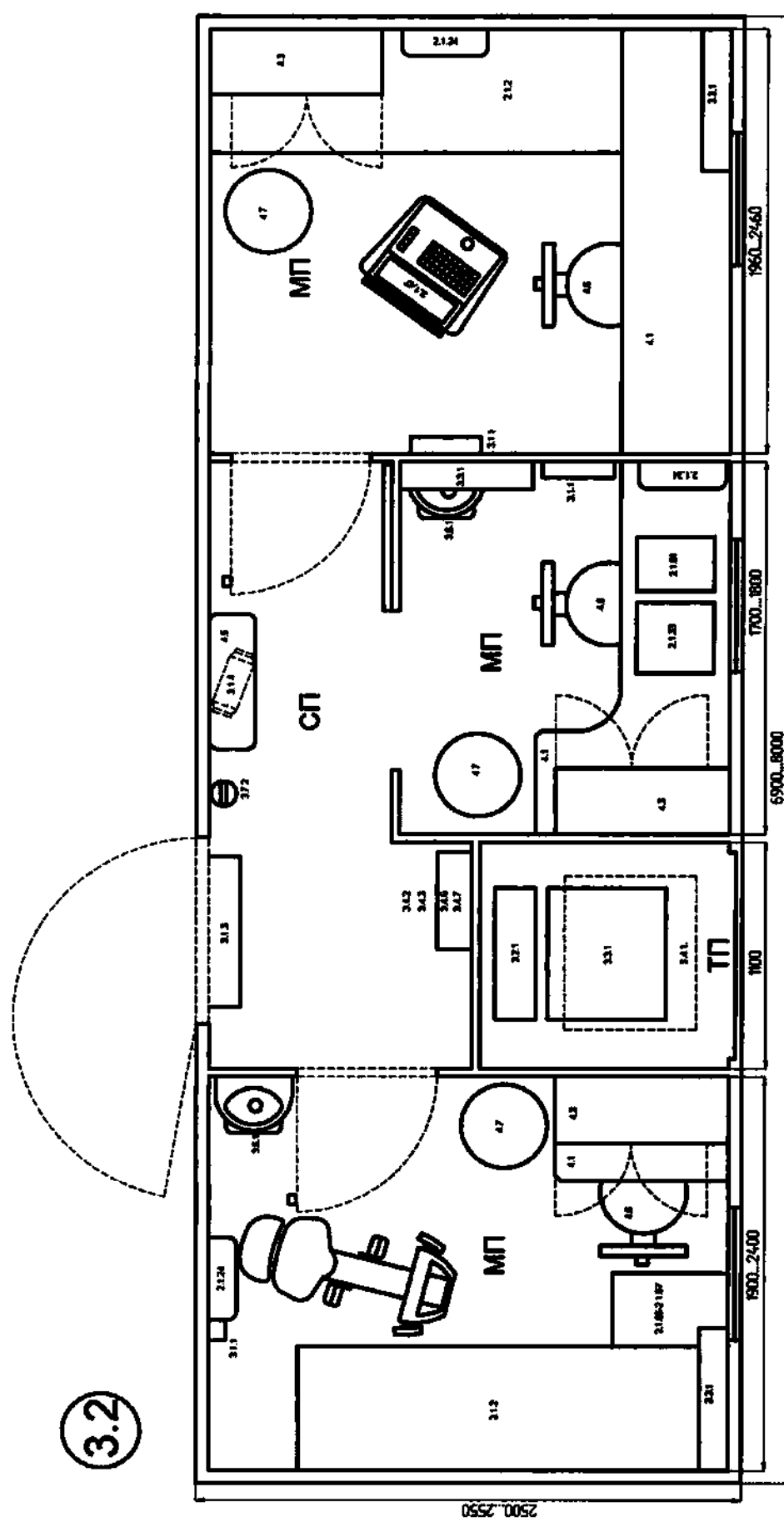

86567070.941149.001-01

13 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Мобильный лечебно-профилактический модуль МЛПМ «Диагностика» ТУ 29.10.59-017-86567070-2023

Варианты исполнения:

1. Мобильный лечебно-профилактический модуль МЛПМ «Диагностика» по ТУ 29.10.59-017-86567070-2023, вариант исполнения 1, на базе БТС 57561Z, 57550Z, 57552Z, 57530Z, 47195Z, 47193Z, 87528Z, 87551Z, 87578Z

Состав:

- Базовое транспортное средство 57561Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 57550Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 57552Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 57530Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 47195Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 47193Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 87528Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 87551Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 87578Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.;

Медицинские изделия:

- Кресло гинекологическое-урологическое "Клер"-КГЭМ по ТУ 32.50.30-002-43656656-2020 в вариантах исполнения: «Клер»-КГЭМ-01, «Клер»-КГЭМ-01-1, «Клер»-КГЭМ-02, «Клер»-КГЭМ-03(Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03499), ООО ТПФ «Клер», Россия – 1 шт.,
или
- Кресло гинекологическое КГ-04-«Диакомс» по ТУ 9452-062-17099103-2010 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08777), ООО "Диакомс", Россия – 1 шт.,
или
- Кресло гинекологическое КГ-3М по ТУ 9452-021-07614107-2004 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07066), АО "Досчатинский завод медицинского оборудования", Россия – 1 шт.,

86567070.941149.001-01

Лист

86

– Мебель медицинская складная "Поллюс" по ТУ 9452-007-59563632-2015, вариант исполнения: кушетка складная КС, с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4082), ООО "НПО "ПОЛЮС", Россия – 1 шт.,

или

– Мебель медицинская для кабинетов и палат по ТУ 9452-001-16789225-2016 / Кушетка смотровая: М111-039 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5521), ООО "Техсервис", Россия – 1 шт.,

или

– Кушетка медицинская по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018 вариант исполнения: МД КС-01 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8453), ООО "НПО ПРОМЕТ", Россия – 1 шт.,

– Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014 вариант исполнения: Р-Ст-«МСК» (МСК 234) предназначенный для измерения роста человека стоя (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4294), ООО "Медстальконструкция", Россия – 1 шт.,

или

– Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 вариант исполнения: РЭП; РЭС; РП; РС; РП (эконом); РЭП-И; РЭС-И (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11607), АО "ТВЕС", Россия – 1 шт.,

или

– Весы медицинские электронные напольного типа сеса, с принадлежностями (принадлежность Ростомер сеса 217) (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07366), "сека гмбх & ко. кг", Германия – 1 шт.,

– Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005 варианты исполнения: ВМЭН-150-50/100-А, ВМЭН-200-50/100-А, ВМЭН-150-50/100-Д1-А, ВМЭН-150-50/100-И-Д1-А, ВМЭН-200-50/100-Д1-А, ВМЭН-200-50/100-И-Д1-А, ВМЭН-150-50/100-Д2-А, ВМЭН-150-50/100-И-Д2-А, ВМЭН-200-50/100-Д2-А, ВМЭН-200-50/100-И-Д2-А, ВМЭН-150-50/100-Д3, ВМЭН-150-50/100-И-Д3, ВМЭН-200-50/100-Д3, ВМЭН-200-50/100-И-Д3, ВМЭН-150-50/100-СТ-А, ВМЭН-150-50/100-И-СТ-А, ВМЭН-200-50/100-СТ-А, ВМЭН-200-50/100-И-СТ-А, ВМЭН-150-50/100-А-3В, ВМЭН-200-50/100-А-3В, ВМЭН-150-50/100-С-СТ-А, ВМЭН-150-50/100-С-И-СТ-А, ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А, ВМЭН-200-50/100-С-И-СТ-А, ВМЭН-150-50/100-С-Д1-А, ВМЭН-150-50/100-С-И-Д1-А, ВМЭН-200-50/100-С-Д1-А, ВМЭН-200-50/100-С-И-Д1-А (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/09964), Открытое акционерное общество "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия – 1 шт.

или

– Весы электронные медицинские ВЭМ-150-"Масса-К" по ТУ 4274-017-27450820-2008 варианты исполнения: ВЭМ-150.3-А1 без стойки с тремя интервалами взвешивания, ВЭМ-150.3-А2 с круглой вращающейся стойкой с тремя интервалами взвешивания (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02905), АО "МАССА-К", Россия - 1 шт.

– Тонометр механический с принадлежностями, вариант исполнения: big ben (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11768), «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),

– Измерители артериального давления серии ИАД-01-"Адьютор" по ТУ 26.60.12-003-58286981-2019 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12919), ООО "Адьютор", Россия - 1 шт.,

или

– Измеритель артериального давления механический ИАДМ - "ТРИВЕС-ПЧЗ-М" по ТУ 9441-002-33094849-2005 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08666), ООО "Тривес", Россия - 1 шт.,

или

– Измеритель артериального давления мембранный ИАДМ-01-Медтехника с принадлежностями по ТУ 9441-015-27418804-2007 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/01763), ООО "МЕДТЕХНИКА", Россия - 1 шт.,

86567070.941149.001-01

Лист

87

или

– Измеритель артериального давления CS Medica CS-105 в комплекте (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04070), "Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.", Китай - 1 шт.,

или

– Приборы для измерения артериального давления моделей PRO-60, MED-61, MED-62, MED-63 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7689), "Би.Велл Свисс АГ", Швейцария - 1 шт.,

или

- Тонометр механический с принадлежностями, варианты исполнения: R1-shock proof; minimus II; minimus III; precisa N; e-mega; ri-san; exakta; sphygmotensiophone; babyphon; sanaphon (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11768), "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия - 1 шт.,

– Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M3 Expert (HEM-7132-ALRU) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3210), "ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд.", Япония - 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),

– Стетоскоп акушерский деревянный Сад-"М-МИЗ" по ТУ 9398-093-07613473-2003 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00767), ОАО "Можайский медико-инструментальный завод", Россия - 1 шт. (при необходимости),

– Стетофонендоскоп CS Medica вариант исполнения: Стетофонендоскоп CS Medica CS-421 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04072), «Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.», Китай - 2 шт.,

и/или

– Стетофонендоскопы «СФ-Адьютор» по ТУ 26.60.12-002-58286981-2019, варианты исполнения: стетофонендоскоп СФ-01-"Адьютор" с односторонней фонендоскопической головкой для аускультации тонов Короткова у взрослых; стетофонендоскоп СФ-02-"Адьютор" с двусторонней фонендоскопической и стетоскопической головкой для детей для аускультации тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03-"Адьютор" Раппопорта с серыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03У-"Адьютор" Раппопорта с серыми удлиненными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.1-"Адьютор" Раппопорта с синими трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.2-"Адьютор" Раппопорта с розовыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.3-"Адьютор" Раппопорта с оранжевыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.4-"Адьютор" Раппопорта с зелеными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.5-"Адьютор" Раппопорта с черными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.6-"Адьютор" Раппопорта с красными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.7-"Адьютор"

86567070.941149.001-01

Лист

88

Раппорта с желтыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.8-"Адьютор" Раппорта с фиолетовыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей (Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1813) ООО "АДЬЮТОР", Россия) - 2 шт.,

и/или

– Стетофонендоскоп Б.Е.Вотчала СФОН-01 по ТУ 64-1-3121-77 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07228), Закрытое акционерное общество "Нижнетагильский медико-инструментальный завод", Россия - 2 шт.,

и/или

– Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04073), "Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.", Китай - 2 шт.,

и/или

– Стетофонендоскоп CS Medica CS-422 Premium (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6524), "Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.", КНР – 2 шт.,

– Электронный стетофонендоскоп Littmann варианты исполнения: 3100; 3200 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07526), "3М Компани, 3М Хелс Кепар", США - 1 шт. (при необходимости),

– Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-«САША» по ТУ 4274-018-27450820-2004, вариант исполнения: В1-15.3К (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1197), АО "МАССА-К", Россия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет ВЭНД-01-"Малыш" по ТУ 4274-021-00226454-2002 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11958) Открытое акционерное общество "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия - 1 шт. (при необходимости),

– Термометры электронные, вариант исполнения: DT-623 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09384), "Вега Текнолоджис Инк.", Китай – 1 шт.,

или

– Термометр электронный медицинский OMRON Eco Temp Basic (MC-246-RU) (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05423), OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония – 1 шт.,

или

– Термометр инфракрасный бесконтактный TOPMED с принадлежностями, варианты исполнения: NC-178, NC-186, NC-192 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7384), "Гуанчжоу Цзиньсиньбао Электроник Ко., Лтд.", КНР – 1 шт.,

или

Термометры медицинские инфракрасные SENSITEC, варианты исполнения: бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NF-3102, бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NF-3101, бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NF-3103, бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NB-401, бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NB-402, инфракрасный термометр SENSITEC ET-211 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10946), "Алексмед Интернэшнл Б. В.", Нидерланды – 1 шт.,

– Электрокардиограф 3-6-12 каналный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-"Р-Д" по ТУ 2660-005-24149103-2018, варианты исполнения: ЭК12Т-01-"Р-Д"/141, МТЦ.31.00.000, ЭК12Т-01-"Р-Д"/260 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14015), ООО «НПП «Монитор», Россия - 1 шт.,

или

86567070.941149.001-01

Лист

89

- Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 "АКСИОН" с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/01874), ОАО Концерн "Аксин", Россия – 1 шт.,
или
- Комплекс аппаратно-программный "Валента" для проведения исследований функциональной диагностики по ТУ 9441-001-80502299-2007 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00259, ООО "Компания Нео", Россия) – 1 шт.,
- Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД "Валента" по ТУ 9441-002-80502299-2007 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00260) ООО "Компания Нео", Россия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком-комби» по ТУ 9442-001-86580521-2014 в составе с регистратором КР-06 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2451), ООО "МЕДИКОМ", Россия - 1 шт. (при необходимости),
- Пульсоксиметр медицинский "Armed", вариант исполнения: УХ301 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07461), "Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", Китай – 2 шт.,
и/или
- Пульсоксиметр для определения частоты пульса и насыщения гемоглобина крови кислородом ПО-02-"КАРДЕКС" по ТУ 9441-003-25630854-00 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02293), ООО "КАРДЕКС", Россия - 2 шт.,
- Устройство-спиротест цифровое скринингового определения жизненной емкости легких и объема первого секундного форсированного выдоха портативное УСПЦ-01 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00694), ООО "МИТК-М", Россия – 1 шт.,
или
- Устройство мониторинга параметров внешнего дыхания человека, портативное цифровое "Спиротест УСПЦ-01М" по ТУ 26.60.12-003-18859607-2020, в составе с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18043, ООО "МИТК-М", Россия) – 1 шт.,
или
- Аппараты для спирометрии и пульсоксиметрии MIR с принадлежностями мод.: Spirobank I/G/II (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5323), "МИР С.р.л. - МЕДИКАЛ ИНТЕРНЕШНЛ РИСЕРЧ", Италия – 1 шт.,
или
- Спирометр автономный запоминающий MAC2 с принадлежностями, варианты исполнения MAC2-Б, MAC2-С, MAC2-ПК, MAC2-БМ, MAC2-ПКм (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5851), ООО "Белинтелмед", Республика Беларусь – 1 шт.,
- Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06211), ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА", Россия – 1 шт.,
или
- Анализаторы для определения глюкозы HemoCue Glucose 201+ и гемоглобина моделей HemoCue Hb 201+ и Plasma/Low Hb с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3622) "ХемоКью АБ", Швеция – 1 шт.,
или
- Анализатор крови портативный биохимический EasyTouch® варианты исполнения: EasyTouch® G, EasyTouch® GC, EasyTouch® GHb, EasyTouch® GU, EasyTouch® GCU, EasyTouch® GCHb (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10454), Биоптик Технолджи, Инк., Тайвань – 1 шт.,
- Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active) с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00817), "Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Германия – 1 шт.,

86567070.941149.001-01

Лист

90

или

– Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный ПКГ-02.4 "Сателлит плюс" в комплекте с полоской электрохимической однократного применения ПКГЭ-02.4 по ТУ 9443-002-78939528-2006 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12519), ООО "Компания "ЭЛТА", Россия – 1 шт.,

или

– Система контроля уровня глюкозы крови (глюкометр) «Акку-Чек® Инстант» (Accu-Chek® Instant) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13212), "Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Германия – 1 шт.,

– Дефибриллятор PRIMEDIC HeartSave (M250) в вариантах исполнения с принадлежностями: варианты исполнения: HeartSave PAD (M250), HeartSave AED (M250), HeartSave AED-M (M250), HeartSave 6 (M250) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6871), «Метракс ГмБХ», Германия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Дефибрилляторы SCHILLER с принадлежностями: FRED мод. easy (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4584) "Шиллер АГ", Швейцария - 1 шт. (при необходимости),

или

– Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015
Вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5391), ООО Концерн "Аксион", Россия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями варианты исполнения: PRIMEDIC DEFI-N (M100), PRIMEDIC DEFI-B (M110) (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10093), Метракс ГмБХ, Германия - 1 шт. (при необходимости),

– Инструменты отесняющие по ТУ 9434-293-07610776-2010 (Регистрационное удостоверение ФСР 2011/10303), ОАО "МИЗ-Ворсма", Россия - 1 шт. (при необходимости)

или

– Инструменты медицинские хирургические, вариант исполнения: инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: щипцы: зажимной инструмент: J-33-500 - J-33-560 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3121), "Сурджикон ЛТД", Пакистан - 1 шт. (при необходимости),

– Ингалятор кислорода КИ-5 по 9В2.933.227ТУ (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/09914), АО "КАМПО", Россия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Ингалятор кислородный КИ-11 по ТУ ППТД.2933.001ТУ (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06202), ООО "Пневмоприбор", Россия - 1 шт. (при необходимости),

– Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006, варианты исполнения: «Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», «Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ» (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11388), АО "КРОНТ-М", Россия - 3 шт. или 4 шт.,

или

– Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный ОРУБ-2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, варианты исполнения: настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» (Дезар-2н), передвижной ОРУБп2-01- «КРОНТ» (Дезар-2п) (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12132), АО "КРОНТ-М", Россия – 3 шт. или 4 шт.,

или

– Рециркулятор УФ-бактерицидный трехламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ-20-«Я-ФП» по ТУ 9451-020-55307168-2012, варианты исполнения: РБ-20-«Я-ФП»-01 (модели: РБ-20-«Я-ФП»-01,

86567070.941149.001-01

Лист

91

В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями. Класс А (Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2254) ООО "ИННОВАЦИЯ", Россия - 2 шт. (при необходимости),

– Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями. Класс Б (Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2254), ООО "ИННОВАЦИЯ", Россия - 2 шт.,

или

– Контейнеры одноразовые, многоразовые для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов МК «МедКом» по ТУ 9398-004-63102960-2012, вариант исполнения: контейнер (бак) многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов классов А, Б, В, Г МК-03 «МедКом» (вид 123680), объемом 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0 л, с принадлежностью - колесная опора «МедКом» (Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14154), ООО «НПФ «МедКом», Россия- 2 шт.,

– Сумка-укладка врача общей практики с наборами медицинскими диагностическими СУВОП-"ДжиСиМед" по ТУ 9398-001-86567070-2009, вариант исполнения: СУВОП-1, СУВОП-2, СУВОП-3, СУВОП-4, СУВОП-5, СУВОП-6 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06761), ООО "ДжиСиМед", Россия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"МЕДИНТ-М" в сумке универсальной СМУ-03 по ТУ 32.50.13-012-18585567-2005 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08890), ООО "МЕДПЛАНТ", Россия - 1 шт. (при необходимости),

– Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения: Duplex (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12207), «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия - 2 шт. (при необходимости),

и/или

– Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения: Cardiophon (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12207), «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия - 2 шт. (при необходимости),

– Анализатор биохимический Spotchem на основе принципа «сухой химии», в исполнении: модель EZ (SP-4430), с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13500), "АРКРЭЙ Фэктори, Инк.", Япония - 1 шт. (при необходимости),

или

– Экспресс-анализатор биохимический портативный "Аккутренд Плюс" (Accutrend Plus) с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02119), "Рош Диагностикс ГмбХ", Германия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Экспресс-анализатор параметров крови портативный, с принадлежностями варианты исполнения: blueCare, multiCare-in (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10072), "Биокемикал Системз Интернэйшнл С.п.А.", италия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Анализатор крови биохимический портативный, Варианты исполнения: CardioChek с принадлежностями, CardioChek PA с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2693), "Полимер Технолоджи Системс, Инк.", США - 1 шт. (при необходимости),

– Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2997), АО "Елатомский приборный завод", Россия - 2 шт. (при необходимости),

– Индикатор внутриглазного давления портативный ИГД-02 "ПРА" по БИРМ.941329.005 ТУ (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06397), АО "Государственный Рязанский приборный завод", Россия - 2 шт. (при необходимости),

- Приборы оптические диагностические для офтальмологии и принадлежности к ним/ Приборы оптические диагностические для офтальмологии/ Офтальмоскопы, исполнение: *gi-score L* (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03907) "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия - 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),
и/или
- Офтальмоскоп *PICCOLIGHT E50* (Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8089), "КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ", Германия - 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),
и/или
- Офтальмоскопы прямые медицинские, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями/ вариант исполнения: Офтальмоскоп прямой медицинский *BETA 200 S* (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4244), "Хайне Оптотехник ГмбХ и Ко., КГ", Германия - 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),
и/или
- Офтальмоскоп налобный бинокулярный *НБО-3* по ТУ 3-3.2304-90 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10602), Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод", Россия - 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),
и/или
- Офтальмоскоп ручной универсальный *ОР-3Б "Блик"* по ТУ 3-3.2303-91 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10601), Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод", Россия - 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),
и/или
- Офтальмоскоп не прямой бинокулярный, варианты исполнения: офтальмоскоп не прямой *OMEGA 600*, офтальмоскоп не прямой *SIGMA 250* (Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/22198), "ХАЙНЕ Оптотехник ГмбХ и Ко. КГ", Германия - 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),
и/или
- Приборы оптические диагностические медицинские с принадлежностями, вариант исполнения: офтальмоскопы, модели *OMEGA 500* (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4414), "Хайне Оптотехник ГмбХ и Ко., КГ", Германия - 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),
- Щелевая лампа офтальмологическая ручная модели *XL-1* в комплекте с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4151), "Рексам Ко., Лтд.", Япония - 1 шт. (при необходимости),
- Комплект высокодиоптрийных асферических линз для диагностики и исследования глазных сред совместно с щелевыми лампами *КЛА-01-"Поиск ТР"* по ТУ 9398-001-18898190-2004 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03134), ООО "Поиск ТР", Россия - 1 компл. (при необходимости),
- Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов *КБ-03-"Я"-ФП* по ТУ 9452-003-55307168-2004 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06570) ООО «Ферропласт Медикал», Россия – 1 шт. (при необходимости),
или
- Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных медицинских инструментов-"СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010 Варианты исполнения: "СПДС-1-К", "СПДС-2-К", "СПДС-3-К" (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09347), ООО "СПДС", Россия – 1 шт. (при необходимости),
- Система ультразвуковой визуализации универсальная серии *МХ* с принадлежностями, вариант исполнения: *МХ7* (Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15226), "Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР - 1 шт. (при необходимости),
или

86567070.941149.001-01

Лист

94

- Аппарат ультразвуковой диагностический DP-50 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10257), "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", Китай - 1 шт. (при необходимости),
или
- Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid iq с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6506), "ДжиИ Медикал Системз (Китай) Ко., Лтд.", Китай - 1 шт. (при необходимости),
или
- Прибор цифровой ультразвуковой диагностический M5 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01996), "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР - 1 шт. (при необходимости),
или
- Прибор ультразвуковой диагностический M7 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07629), "Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР - 1 шт. (при необходимости),
или
- Система ультразвуковая диагностическая медицинская Versana Active с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17101), "ДжиИ Медикал Системз (Китай) Ко., Лтд.", Китай - 1 шт. (при необходимости),
или
- Прибор ультразвуковой диагностический с принадлежностями Варианты исполнения: DUS 3, DUS 6, DUS 8, DUS 60, U50 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10381) "Эдан Инструментс, Инк.", Китай - 1 шт. (при необходимости),
или
- Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями, варианты исполнения: S2N, S8Exp, S9, S30 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1328) "СОНОСКЕЙП МЕДИКАЛ КОРП.", Китай - 1 шт. (при необходимости),
- Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках/ В отдельных упаковках/ Инструмент для диагностики нервной проводимости / вариант исполнения: busk (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08456), "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия – 1 шт.,
или
- Молоток неврологический для исследования сухожильных рефлексов МН-"М-МИЗ" по ТУ 9439-034-07613473-2005 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06065), ОАО "Можайский медико-инструментальный завод", Россия – 1 шт.,
- Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения: по Риделло-Сейферу 64 Гц/128 Гц с подставкой, С-1 256 Гц (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08456), "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия - 1 шт.(при необходимости),
или
- Камертоны медицинские, вариант исполнения: Камертон с 128/с 64 Hz по Рюдель-Зейферу из стали с демпферами (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18824), "Кирхнер & Вильгельм ГмбХ + Ко. КГ", Германия – 1 шт. (при необходимости),
- Анализатор полуавтоматический Finescape™ FIA иммунофлуоресцентный для диагностики in vitro варианты исполнения FS-113, FS-205 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18037), "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай - 1 шт. (при необходимости),
или
- Анализатор Getein1100 для количественного определения биомаркеров иммунофлуоресцентным методом (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12609), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай - 1 шт. (при необходимости),
- Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи по ТУ 9437-013-52777873-2014, вариант исполнения: Укладка для оказания скорой медицинской помощи УМСП-02-«МЕДПЛАНТ» общепрофильная / специализированная (реанимационная)

86567070.941149.001-01

Лист

95

(Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2746), ООО "МЕДПЛАНТ", Россия 1 шт. (при необходимости),

– Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 варианты исполнения: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07335), ООО "МЕДПЛАНТ", Россия - 1 шт. (при необходимости),

– Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д и КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00439), ООО "МЕДПЛАНТ", Россия - 1 шт.,

или

– Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом первой помощи по ТУ 9444-169-17493159-2002 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08608), ООО "МИТК-М", Россия - 1 шт.,

или

– Аппарат искусственной вентиляции легких ручной полевой ДП-11 по 9В2.933.226ТУ (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04397), АО "КАМПО", Россия - 1 шт.,

или

– Мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения в следующих исполнениях: мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения, неонатальный, мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения, детский, мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения, взрослый (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6725), ООО "Ассомедика", Республика Беларусь - 1 шт.,

– Анализаторы гематологические автоматические "ГЕМАЛАЙТ" по ТУ 9443-011-74487176-2007 модель "ГЕМАЛАЙТ 1270" (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00675 ООО "ДИКСИОН", Россия) - 1 шт. (при необходимости),

или

– Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями варианты исполнения: MicroCC-18 MicroCC-20Plus (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07756), "Хай Текнолоджи, Инк.", США - 1 шт. (при необходимости),

– Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» по ТУ 9452-037-11769436-2010 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10034), АО "КРОНТ-М", Россия - 2 шт. (при необходимости),

или

– Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП по ТУ 9452-156-05519988-2006, варианты исполнения: Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-10; Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-20; Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-40 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11883), ООО "Полимерные изделия", Россия - 2 шт. (при необходимости),

– Центрифуга лабораторная медицинская настольная "Armed" варианты исполнения: LC-04A, LC-04B, HC-12C (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10939), "Зенит Лаб (Цзянсу) Ко., Лтд.", Китай - 1 шт. (при необходимости),

или

– Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями, варианты исполнения: CM-12, CM-12M, ОПН-8М, (Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9166), ООО "ТАГЛЕР", Россия - 1 шт. (при необходимости),

– Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках и принадлежности к ним, Приборы оптические диагностические в наборах и отдельных упаковках: Отоскопы, модели: gi-score L (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03905), "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия - 1 шт. (при необходимости),

или

86567070.941149.001-01

Лист

96

- Прибор оптический диагностический: отоскоп с принадлежностями вариант исполнения: e-score (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13250), "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Отоскоп диагностический EliteVue (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12957), "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия - 1 шт. (при необходимости),
- Набор пробных очковых линз упрощенный НПУ-69-01 по ТУ 9442-001-39589405-2002 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00471), ООО МРП "Техноаргус", Россия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Набор пробных очковых линз и призм средний НС-277-01 по ТУ 9442-005-39589405-2002 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00473), ООО МРП "Техноаргус", Россия - 1 шт. (при необходимости),
- Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 по ТУ 9442-002-39589405-2002 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00950), ООО МРП "Техноаргус", Россия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Проектор знаков экранный офтальмологический ТСР, с принадлежностями варианты исполнений: ТСР-2000, ТСР-2000 А, ТСР-3000 Р (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07992), "Томэй ГмбХ", Германия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Проектор знаков ССР-3100 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1168) "Хувитц Ко., Лтд", Корея - 1 шт. (при необходимости),
или
- Проектор знаков офтальмологический НСР-7000 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09410), "Хувитц Ко., Лтд", Корея - 1 шт. (при необходимости),
или
- Проектор знаков экранный офтальмологический Stern, варианты исполнения Stern Opton, Stern Opton Plus по ТУ 32.50.13-001-52746973-2018 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8092) ООО "СТЕРН", Россия - Корея - 1 шт. (при необходимости),
- Анализатор определения границ, дефектов и световой чувствительности поля зрения компьютеризированный АПЗ-30/50/100-«ПЕРИТЕСТ» по ТУ 9442-002-11432330-2003 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13976) ИП Гуров Андрей Сергеевич, Россия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Периметр автоматический офтальмологический АР-3000 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09934), "Томэй ГмбХ", Германия - 1 шт. (при необходимости),
- Светильники медицинские с принадлежностями, вариант исполнения: KaWe Masterlight (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4777), "КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ", Германия - 1 шт.,
или
- Светильники медицинские АРМЕД по ТУ 9452-005-13391002-2014 вариант исполнения: - АРМЕД-ЛД-2-ЛЕД (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4059), ООО "НПЦ МТ "АРМЕД", Россия - 1 шт.,
или
- Светильники передвижные "ЭМАЛЕД" в вариантах исполнения по ТУ 9452-015-46655261-2011: светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100 П» (с блоком аварийного питания), светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100 П LT» (с блоком аварийного питания), светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100-01 П»,

светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100-01 П LT» (ПУ № ФСР 2009/05897), ЗАО "Завод ЭМА", Россия - 1 шт.,

– Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями варианты исполнений: Налобное зеркало ziegler, Гибкий осветитель ri-magic LED, Диагностический осветитель fortelux N, Набор ri-light (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12398), "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия - 1 шт. (при необходимости),

– Приборы оптические диагностические для дерматологии и принадлежности к ним, Дерматоскоп ri-derma (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03906), "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Дерматоскопы медицинские, с принадлежностями варианты исполнения, DELTA 20, DELTA 20 Plus (Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2033) "Хайне Оптотехник ГмбХ и Ко., КГ", Германия – 1 шт. (при необходимости),

или

– Дерматоскопы и наборы диагностические: KaWe Piccolight D, KaWe Eurolight D 30 в комплекте (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2924), "КИРХНЕР ЭНД ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ", Германия – 1 шт. (при необходимости),

– Кольпоскоп ЭКС-1М с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07705), ООО "НПП ЭКОМП", Беларусь - 1 шт. (при необходимости),

или

– Кольпоскопы напольные бинокулярные КНБ-02-"Зенит" и КНБ-03-"Зенит" по ТУ 9442-004-07526142-2006 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00118), ПАО "КМЗ", Россия - Беларусь - 1 шт. (при необходимости),

– Динамометры кистевые четырех типоразмеров: ДК-25, ДК-50, ДК-100 и ДК-140 по ТУ 64-1-3842-84 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02239), ЗАО "Нижнетагильский медико-инструментальный завод", Россия - 2 шт. (при необходимости),

или

– Динамометры медицинские электронные ручные ДМЭР-30, ДМЭР-90, ДМЭР-120 по ТУ 9441-035-00226454-2007 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02492) АО "ТВЕС", Россия - 2 шт. (при необходимости),

– Прибор для определения оксида углерода в выдыхаемом воздухе АНКАТ-7635Smokerlyzer по ИБЯЛ.941439.001 ТУ (Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1722), ФГУП "Смоленское производственное объединение "Аналитприбор", Россия – 1 шт. (при необходимости),

– Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 по ТУ 9443-166-07502348-2005 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08206), АО "ЛОМО", Россия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Микроскоп биологический Биолаб для лабораторной диагностики in vitro, вариант исполнения: Микроскоп биологический Биолаб 5 для лабораторной диагностики in vitro (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17987), "Нинбо Тичинг Инструмент Ко., Лтд.", Китай - 1 шт. (при необходимости).

– Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00268), Открытое акционерное общество "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина", Россия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Инструменты медицинские многоповерхностного воздействия (зажимные), с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12517), "Саммар Интернешен", Пакистан - 1 шт. (при необходимости),

– Ножницы медицинские по ТУ 32.50.13-003-39241292-2022 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20444), ООО "МИЗ-ТУМБОТИНО", Россия - 1 шт. (при необходимости),

или

86567070.941149.001-01

Лист

98

- Инструменты режущие по ТУ 9433-285-07613444-2010 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07370), ОАО "МИЗ им. М.Горького", Россия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Инструменты медицинские хирургические режущие (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02888), "СУРДЖИВЕЛЛ", Пакистан - 1 шт. (при необходимости),
- Лотки металлические медицинские ЛММ-«МЕДИКОН» по ТУ 9452-001-27846954-2008 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03233), ООО "НПФ "МЕДИКОН", Россия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Лоток полимерный почкообразный, с крышкой, ручкой и носиком для слива ЛПпо-1,75-ЕЛАТ" по ТУ 9398-007-24320270-2004 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00130), АО "ЕПЗ", Россия - 1 шт. (при необходимости),
- Дозаторы пипеточные "ЭКРОС" и "ЭКОХИМ" по ТУ 9452-046-23050963-2007 варианты исполнения: ЭКРОС - ОФ (вид 124480); ЭКРОС - ОП (вид 124480); ЭКРОС - МП (вид 124540); - ЭКОХИМ - ОФ (вид 124480); ЭКОХИМ - ОП (вид 124480); - ЭКОХИМ - МП (вид 124540); ЭКОХИМ - ОФА (вид 124480); ЭКОХИМ - ОПА (вид 124480) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2668), ООО "ЭКРОСХИМ", Россия - 2 шт. (при необходимости),
и/или
- Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объемами доз, одно- и многоканальные "Колор" по ТУ 9452-002-33189998-2007 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/01430), АО "Термо Фишер Сайентифик", Россия - 2 шт. (при необходимости),
и/или
- Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, "Техно" по ТУ 9443-009-33189998-2009 (ПУ № ФСР 2009/06508), АО "Термо Фишер Сайентифик", Россия - 2 шт. (при необходимости),

Расходные медицинские изделия:

- Набор реагентов для быстрого количественного определения сердечного тропонина I (сTn I) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finescape™ FIA для диагностики in vitro (сTn I Rapid Quantitative Test) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17581), "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (DD) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finescape™ FIA для диагностики in vitro (D-Dimer Rapid Quantitative Test) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17523), "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Набор реагентов для быстрого количественного определения N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finescape™ FIA для диагностики in vitro (NT-proBNP Rapid Quantitative Test) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16838, "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Набор реагентов для быстрого количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finescape™ FIA для диагностики in vitro (HbA1c Rapid Quantitative Test) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16827), "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Набор реагентов для быстрого количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finescape™ FIA для диагностики in vitro (PCT Rapid Quantitative Test) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16845), "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Набор реагентов для быстрого количественного определения тиреотропного гормона (TSH) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finescape™ FIA для диагностики

86567070.941149.001-01

Лист

99

in vitro (TSH Rapid Quantitative Test) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17525), "Гуанчжоу Вондфо Байотек Ко., Лтд.", Китай – 1 компл. (при необходимости),

– Набор реагентов для количественного определения сердечного тропонина I (сTnI) иммунофлуоресцентным методом (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/11565), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),

– Набор реагентов для количественного определения сердечного изофермента креатинкиназы, тропонина I, миоглобина (СК-MB/сTnI/Myo) иммунофлуоресцентным методом (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/11493), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),

– Набор реагентов для количественного определения N-терминального мозгового натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) иммунофлуоресцентным методом (Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13774), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),

– Набор для быстрого количественного определения С-реактивного белка (hs-CRP+CRP) (в сыворотке, плазме и цельной крови человека) иммунофлуоресцентным методом (hs-CRP+CRP FastTestKit) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16802), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),

– Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом (PCT Fast Test kit (Immunofluorescence Assay)) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16697), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),

– Набор реагентов для количественного определения D - димера (D - dimer) иммунофлуоресцентным методом (D-dimer Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16615), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),

– Набор для быстрого определения антигена SARS-CoV-2 (в мазках из носоглотки и ротоглотки) иммунофлуоресцентным методом (SARS-CoV-2 Antigen Fast Test Kit) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18079), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),

– Реагенты для биохимического анализатора SPOTCHEM (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00751), "АРКРЭЙ Фэктори, Инк.", Япония – 1 компл. (при необходимости),

– Материалы расходные для биохимического анализатора SPOTCHEM (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00750), "АРКРЭЙ Фэктори, Инк.", Япония – 1 компл. (при необходимости),

– Тест-полоски для биохимического анализатора SPOTCHEM (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2385), "АРКРЭЙ Фэктори, Инк.", Япония – 1 компл. (при необходимости),

– Набор тест-полосок для in vitro диагностики для количественного определения биохимических показателей в сыворотке или плазме крови на анализаторах биохимических SPOTCHEM (Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21222), "АРКРЕЙ Фэктори, Инк.", Япония – 1 компл. (при необходимости),

– Тест-полоски и контрольные растворы для анализатора крови портативного биохимического EasyTouch (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11677), Биоптик Технолоджи, Инк., Тайвань – 1 компл. (при необходимости),

– Тест-полоски "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active) (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01205) "Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Германия – 1 компл. (при необходимости),

– Тест-полоски и контрольные растворы для экспресс-анализаторов биохимических портативных «Аккутренд» (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06626), "Рош Диагностикс ГмбХ", Германия – 1 компл. (при необходимости),

– Реагенты диагностические к анализаторам мочи моделей Н-50, Н-100, Н-300, Н-500, Н-800 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08127), "Дижуй Индастриал Ко., Лтд.", Китай – 1 компл. (при необходимости),

86567070.941149.001-01

Лист

100

- Тест-полоски URISCAN для анализаторов мочи URISCAN PRO, URISCAN OPTIMA (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07858), "ЕД Диагностикс КОРП.", Республика Корея– 1 компл. (при необходимости),
 - Тест-полоски URISCAN® для анализа состава и свойств мочи (Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20860, "УайДи Диагностикс КОРП."), Республика Корея– 1 компл. (при необходимости),
 - Набор реагентов "УНИГЕМ" для анализатора гематологического MicroCC-20Plus по ТУ 21.20.23-001-44619717-2020 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18968), ООО "ВЕЛМА-ТЕСТ", Россия – 1 компл. (при необходимости),
 - Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче УРИГЛЮК-1 по ТУ 21.20.23-001-45677786-2018 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11001), ООО "Биосенсор АН", Россия – 1 компл. (при необходимости),
- или
- Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018 Вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения; глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11А (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02809), ООО "Биосенсор АН", Россия – 1 компл. (при необходимости),
- или
- Полоски индикаторные для определения скрытой крови, кетонов, глюкозы, белка, pH в моче БИОСКАН-ПЕНТА по ТУ 9398-006-33020495-2006 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13016), ООО "БИОСКАН", Россия – 1 компл. (при необходимости),
 - Набор реагентов для иммунохроматографического выявления скрытой крови в кале человека (ИммуноХром-ГЕМ-Экспресс) по ТУ 9398-011-53915567-2005 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06858), ООО "МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА", Россия – 1 компл. (при необходимости),
 - Набор гинекологический смотровой одноразовый стерильный "Ева" по ТУ 9437-045-44942795-2009 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07047), ООО "Полимерные изделия", Россия – 1 компл. (при необходимости),
- или
- Наборы гинекологические "Юнона" (ТУ РБ 300046934.010-2002) (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12751), ЗАО "Медицинское предприятие Симург", Республика Беларусь – 1 компл. (при необходимости),
 - Роторасширитель винтовой одноразовый (Регистрационное удостоверение РЗН 2021/13297), "Сямынь Компауэр Медикал Тек. Ко., Лтд.", Китай - 1 шт. (при необходимости),
 - Наборы для анестезиологии и реанимации (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05211), "Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед", США – 1 шт. (при необходимости),
- или
- Набор одноразовый для устранения асфиксии (коникотомии) по ТУ 32.50.13-002-35453034-2017 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20321), ООО "НОВОПЛАСТ-М" Россия – 1 шт. (при необходимости),
 - Набор проктологический одноразовый стерильный "ЕваПро" по ТУ 9437-068-44942795-2012 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/917), ООО "Полимерные изделия", Россия – 1 компл. (при необходимости).

Комплект выносного оборудования:

- Анализатор мочи модель: Н-100 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2490) "Дижуй Индастриал Ко., Лтд.", КНР - 1 шт.* (при необходимости),
- или

86567070.941149.001-01

Лист

101

– Анализаторы мочи CL-50 Plus, CL-500 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3986) "Хай Текнолоджи, Инк.", США - 1 шт.* (при необходимости),

или

– Анализатор мочи на тест полосках URiSCAN-strip с принадлежностями по ТУ 9443-034-59879815-2012 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/761 ООО "Эйлитон", Россия) - 1 шт.* (при необходимости),

или

– Анализатор мочи URiSCAN, варианты исполнения: URiSCAN-Pro, URiSCAN-Optima (Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15101, "УайДи Диагностикс КОРП.", Республика Корея) - 1 шт.* (при необходимости),

– Термоконтейнеры переносные для кратковременного хранения крови, кровезаменителей и биопрепаратов ТМ-«МОКА» Варианты исполнения: ТМ4; ТМ6; ТМ9; ТМ16; ТМ25; ТМ32; ТМ50 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/617), ООО "МОКА" (ООО "Мока"), Россия - 1 шт.* (при необходимости),

или

– Термоконтейнеры многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток и других лекарственных средств ТМ-"ТЕРМО-КОНТ МК" по ТУ 9452-005-13549456-2012 Варианты исполнения: ТМ-1, ТМ-5, ТМ-8, ТМ-20, ТМ-35, ТМ-52, ТМ-80. (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03885), ООО "Термо-Конт МК", Россия - 1 шт.* (при необходимости).

Системы жизнеобеспечения и вспомогательное оборудование:

Система отопления:

- Электрический обогреватель – 3 шт.,
- Электрический обогреватель – 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),
- Тепловая воздушная завеса – 1 шт.,
- Автономный отопитель – 1 шт.,
- Автономный отопитель – 1 шт. (при необходимости);

Система вентиляции:

- Приточная фильтро-вентиляционная установка – 1 шт.;

Система кондиционирования:

- Сплит-система – 1 компл.,

Система электроснабжения:

- Автономный генератор – 1 шт.,
- Преобразователь напряжения бортовой сети – 1 шт.,
- Зарядное устройство для аккумулятора – 1 шт.,
- 3-х проводной изолированный электрический кабель (с многожильными медными проводами) – 1 шт.,
- Однопроводной электрический кабель заземления (с многожильным медным проводом) – 1 шт.,
- Источник бесперебойного питания – 1 шт. (при необходимости),
- Стабилизатор напряжения – 1 шт. (при необходимости);

Система освещения – 1 компл.;

Система водоснабжения:

- Водонагреватель – 1 компл. (при необходимости),
- Биотуалет – 1 шт. (при необходимости);

86567070.941149.001-01

Лист

102

Система пожарной сигнализации и пожаротушения:

- Извещатель пожарный дымовой/ загазованности СО – 1 компл.,
- Огнетушитель – 2 шт.,

Средства связи – 1 компл.;

Видеорегистратор – 1 шт. (при необходимости);

Беспроводной маршрутизатор – 1 шт. (при необходимости);

Рабочее место врача (фельдшера) с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» и (или) рабочее место акушера (медицинской сестры) с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» – 1 компл. (при необходимости);

Мебель:

- Рабочий стол – 3 шт.,
- Рабочий стол – 1 шт. (при необходимости),
- Шкаф – 3 шт.,
- Шкаф – 1 шт. (при необходимости),
- Банкетка – 1 шт.,
- Стул – 3 шт.,
- Табурет – 3 шт. (при необходимости).

Эксплуатационная документация:

- Руководство по эксплуатации МЛПМ «Диагностика» – 1 шт.,
- Технический паспорт МЛПМ «Диагностика» – 1 шт.

2. Мобильный лечебно-профилактический модуль МЛПМ «Диагностика» по ТУ 29.10.59-017-86567070-2023, вариант исполнения 2, на базе БТС 57561Z, 57550Z, 57552Z, 57530Z, 47195Z, 47193Z, 87528Z, 87551Z, 87578Z

Состав:

- Базовое транспортное средство 57561Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 57550Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 57552Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 57530Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 47195Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 47193Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 87528Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,

86567070.941149.001-01

Лист

103

или

– Базовое транспортное средство 87551Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,

или

– Базовое транспортное средство 87578Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.;

Медицинские изделия:

– Мебель медицинская складная "Поллюс" по ТУ 9452-007-59563632-2015, вариант исполнения: кушетка складная КС, с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4082), ООО "НПО "ПОЛЮС", Россия – 1 шт.,

и/или

– Мебель медицинская для кабинетов и палат по ТУ 9452-001-16789225-2016 / Кушетка смотровая: М111-039 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5521), ООО "Техсервис", Россия – 1 шт.,

или

– Кушетка медицинская по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018 вариант исполнения: МД КС-01 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8453), ООО "НПО ПРОМЕТ", Россия – 1 шт.,

– Оборудование процедурное для медико-косметологического кабинета Кушетка процедурная, модель: Тур AF1 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/303), "ИОНТО Хелс энд Бьюти ГмбХ", Германия – 1 шт.,

или

– Массажное кресло многофункциональное электрическое (для массажа рук, ног и тела, а также для проведения косметологических процедур) по ТУ 9452-016-98238288-2016 вариант исполнения: ММКП-3 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/76210), ООО "Медтехника-Р", Россия – 1 шт.,

или

– Мебель медицинская складная "Поллюс" по ТУ 9452-007-59563632-2015, вариант исполнения: кушетка складная КС, с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4082), ООО "НПО "ПОЛЮС", Россия – 1 шт.,

или

– Мебель медицинская для кабинетов и палат по ТУ 9452-001-16789225-2016 / Кушетка смотровая: М111-039 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5521), ООО "Техсервис", Россия – 1 шт.,

или

– Кушетка медицинская по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018 вариант исполнения: МД КС-01 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8453), ООО "НПО ПРОМЕТ", Россия – 1 шт.,

– Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014 вариант исполнения: Р-Ст-«МСК» (МСК 234) предназначенный для измерения роста человека стоя (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4294), ООО "Медстальконструкция", Россия – 1 шт. (при необходимости),

или

– Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 вариант исполнения: РЭП; РЭС; РП; РС; РП (эконом); РЭП-И; РЭС-И (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11607), АО "ТВЕС", Россия – 1 шт. (при необходимости),

или

– Весы медицинские электронные напольного типа сеса, с принадлежностями (принадлежность Ростомер сеса 217) (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07366), "сека гмбх & ко. кг", Германия – 1 шт. (при необходимости),

– Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005 варианты исполнения: ВМЭН-150-50/100-А, ВМЭН-200-50/100-А, ВМЭН-150-50/100-Д1-А, ВМЭН-150-50/100-И-Д1-А, ВМЭН-200-50/100-Д1-А, ВМЭН-200-50/100-

86567070.941149.001-01

Лист

104

И-Д1-А, ВМЭН-150-50/100-Д2-А, ВМЭН-150-50/100-И-Д2-А, ВМЭН-200-50/100-Д2-А, ВМЭН-200-50/100-И-Д2-А, ВМЭН-150-50/100-Д3, ВМЭН-150-50/100-И-Д3, ВМЭН-200-50/100-Д3, ВМЭН-200-50/100-И-Д3, ВМЭН-150-50/100-СТ-А, ВМЭН-150-50/100-И-СТ-А, ВМЭН-200-50/100-СТ-А, ВМЭН-200-50/100-И-СТ-А, ВМЭН-150-50/100-А-3В, ВМЭН-200-50/100-А-3В, ВМЭН-150-50/100-С-СТ-А, ВМЭН-150-50/100-С-И-СТ-А, ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А, ВМЭН-200-50/100-С-И-СТ-А, ВМЭН-150-50/100-С-Д1-А, ВМЭН-150-50/100-С-И-Д1-А, ВМЭН-200-50/100-С-Д1-А, ВМЭН-200-50/100-С-И-Д1-А

(Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/09964), Открытое акционерное общество "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия – 1 шт. (при необходимости),
или

– Весы электронные медицинские ВЭМ-150-"Масса-К" по ТУ 4274-017-27450820-2008 варианты исполнения: ВЭМ-150.3-А1 без стойки с тремя интервалами взвешивания, ВЭМ-150.3-А2 с круглой вращающейся стойкой с тремя интервалами взвешивания (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02905), АО "МАССА-К", Россия - 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),

– Тонometr механический с принадлежностями, вариант исполнения: big ben (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11768), «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),

– Измерители артериального давления серии ИАД-01-"Адютор" по ТУ 26.60.12-003-58286981-2019 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12919), ООО "Адютор", Россия - 1 шт.,

или

– Измеритель артериального давления механический ИАДМ - "ТРИВЕС-ПЧЗ-М" по ТУ 9441-002-33094849-2005 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08666), ООО "Тривес", Россия - 1 шт.,

или

– Измеритель артериального давления мембранный ИАДМ-01-Медтехника с принадлежностями по ТУ 9441-015-27418804-2007 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/01763), ООО "МЕДТЕХНИКА", Россия - 1 шт.,

или

– Измеритель артериального давления CS Medica CS-105 в комплекте (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04070), "Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.", Китай - 1 шт.,

или

– Приборы для измерения артериального давления моделей PRO-60, MED-61, MED-62, MED-63 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7689), "Би.Велл Свисс АГ", Швейцария - 1 шт.,

или

- Тонometr механический с принадлежностями, варианты исполнения: R1-shock proof; minimus II; minimus III; precisa N; e-mega; ri-san; exakta; sphygmotensiophone; babyphon; sanaphon (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11768), "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия - 1 шт.,

– Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M3 Expert (HEM-7132-ALRU) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3210), "ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд.", Япония - 1 шт. (при необходимости),

– Стетоскоп акушерский деревянный Сад-"М-МИЗ" по ТУ 9398-093-07613473-2003 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00767), ОАО "Можайский медико-инструментальный завод", Россия - 1 шт. (при необходимости),

– Стетофонендоскоп CS Medica вариант исполнения: Стетофонендоскоп CS Medica CS-421 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04072), «Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.», Китай - 2 шт.,

и/или

– Стетофонендоскопы «СФ-Адютор» по ТУ 26.60.12-002-58286981-2019, варианты исполнения: стетофонендоскоп СФ-01-"Адютор" с односторонней фонендоскопической

86567070.941149.001-01

Лист

105

головкой для аускультации тонов Короткова у взрослых; стетофонендоскоп СФ-02-"Адьютор" с двусторонней фонендоскопической и стетоскопической головкой для детей для аускультации тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03-"Адьютор" Раппопорта с серыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03У-"Адьютор" Раппопорта с серыми удлиненными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.1-"Адьютор" Раппопорта с синими трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.2-"Адьютор" Раппопорта с розовыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.3-"Адьютор" Раппопорта с оранжевыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.4-"Адьютор" Раппопорта с зелеными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.5-"Адьютор" Раппопорта с черными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.6-"Адьютор" Раппопорта с красными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.7-"Адьютор" Раппопорта с желтыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.8-"Адьютор" Раппопорта с фиолетовыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей (Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1813) ООО "АДЬЮТОР", Россия) - 2 шт.,

и/или

– Стетофонендоскоп Б.Е.Вотчала СФОН-01 по ТУ 64-1-3121-77 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07228), Закрытое акционерное общество "Нижнетагильский медико-инструментальный завод", Россия - 2 шт.,

и/или

– Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04073), "Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.", Китай - 2 шт.,

и/или

– Стетофонендоскоп CS Medica CS-422 Premium (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6524), "Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.", КНР – 2 шт.,

– Электронный стетофонендоскоп Littmann варианты исполнений: 3100; 3200 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07526), "3М Компани, 3М Хелс Кеар", США - 1 шт. (при необходимости),

– Термометры электронные, вариант исполнения: DT-623 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09384), "Вега Текнолоджис Инк.", Китай – 1 шт.,

или

– Термометр электронный медицинский OMRON Eco Temp Basic (MC-246-RU) (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05423), OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония – 1 шт.,

86567070.941149.001-01

Лист

106

или

– Термометр инфракрасный бесконтактный TOPMED с принадлежностями, варианты исполнения: NC-178, NC-186, NC-192 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7384), "Гуанчжоу Цзиньсиньбао Электроник Ко., Лтд.", КНР – 1 шт.,

или

Термометры медицинские инфракрасные SENSITEC, варианты исполнения: бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NF-3102, бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NF-3101, бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NF-3103, бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NB-401, бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NB-402, инфракрасный термометр SENSITEC ET-211 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10946), "Апексмед Интернэшнл Б. В.", Нидерланды – 1 шт.,

– Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-"Р-Д" по ТУ 2660-005-24149103-2018, варианты исполнения: ЭК12Т-01-«Р-Д»/141, МТЦ.31.00.000, ЭК12Т-01-«Р-Д»/260 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14015), ООО «НПП «Монитор», Россия - 1 шт.,

или

– Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 "АКСИОН" с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/01874), ОАО Концерн "Аксион", Россия – 1 шт.,

или

– Комплекс аппаратно-программный "Валента" для проведения исследований функциональной диагностики по ТУ 9441-001-80502299-2007 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00259, ООО "Компания Нео", Россия) – 1 шт.,

– Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД "Валента" по ТУ 9441-002-80502299-2007 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00260) ООО "Компания Нео", Россия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком-комби» по ТУ 9442-001-86580521-2014 в составе с регистратором КР-06 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2451), ООО "МЕДИКОМ", Россия - 1 шт. (при необходимости),

– Пульсоксиметр медицинский "Armed", вариант исполнения: УХ301 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07461), "Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", Китай – 1 шт. (при необходимости),

или

– Пульсооксиметр для определения частоты пульса и насыщения гемоглобина крови кислородом ПО-02-"КАРДЕКС" по ТУ 9441-003-25630854-00 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02293), ООО "КАРДЕКС", Россия - 1 шт. (при необходимости),

– Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active) с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00817), "Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Германия – 4 шт. (при необходимости),

и/или

– Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный ПКГ-02.4 "Сателлит плюс" в комплекте с полоской электрохимической однократного применения ПКГЭ-02.4 по ТУ 9443-002-78939528-2006 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12519), ООО "Компания "ЭЛТА", Россия – 4 шт. (при необходимости),

и/или

– Система контроля уровня глюкозы крови (глюкометр) «Акку-Чек® Инстант» (Accu-Chek® Instant) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13212), "Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Германия – 4 шт. (при необходимости),

- Дефибриллятор PRIMEDIC HeartSave (M250) в вариантах исполнения с принадлежностями: варианты исполнения: HeartSave PAD (M250), HeartSave AED (M250), HeartSave AED-M (M250), HeartSave 6 (M250) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6871), «Метракс ГмБХ», Германия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Дефибрилляторы SCHILLER с принадлежностями: FRED мод. easy (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4584) "Шиллер АГ", Швейцария - 1 шт. (при необходимости),
или
- Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015
Вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5391), ООО Концерн "Аксион", Россия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями варианты исполнения: PRIMEDIC DEF1-N (M100), PRIMEDIC DEF1-B (M110) (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10093), Метракс ГмБХ, Германия - 1 шт. (при необходимости),
- Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006, варианты исполнения: «Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», «Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ» (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11388), АО "КРОНТ-М", Россия - 3 шт. или 4 шт.,
или
- Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный ОРУБ-2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, варианты исполнения: настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» (Дезар-2н), передвижной ОРУБп2-01- «КРОНТ» (Дезар-2п) (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12132), АО "КРОНТ-М", Россия – 3 шт. или 4 шт.,
или
- Рециркулятор УФ-бактерицидный трехламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ-20-"Я-ФП" по ТУ 9451-020-55307168-2012, варианты исполнения: РБ-20-«Я-ФП»-01 (модели: РБ-20-«Я-ФП»-01, РБ-20-«Я-ФП»-01П); РБ-20-«Я-ФП»-02 (модели: РБ-20-«Я-ФП»-02, РБ-20-«Я-ФП»-02П) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/654), ООО Общество с ограниченной ответственностью "Ферропласт Медикал"("Ферропласт Медикал"), Россия – 3 шт. или 4 шт.,
или
- Рециркуляторы УФ-бактерицидные для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей "СПДС" по ТУ 9451-002-75620370-2010 варианты исполнения: "СПДС-50-Р", "СПДС-100-Р" (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09816), ООО "СПДС", Россия - 3 шт. или 4 шт.,
- Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004, вариант исполнения: ХФ-140«ПОЗИС» (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05705), АО "ПОЗиС", Россия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Оборудование медицинское для хранения лекарственных средств и вакцин НУС с принадлежностями вариант исполнения: НУС-68 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08608), "Циндао Хайер Биомедикал Ко., Лтд.", Китай - 1 шт. (при необходимости),
или
- Камеры холодильные медицинские "Бирюса" по ТУ 28.25.13-020-07550181-2019
Варианты исполнения: "Бирюса 150К-Г", "Бирюса 150К-Р", "Бирюса 150К-GB", "Бирюса 150К-RB" (Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9387), ОАО "КЗХ "Бирюса", Россия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Холодильник фармацевтический двухкамерный по ТУ 9452-207-07503307-2014,

86567070.941149.001-01

Лист

108

- Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения: Duplex (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12207), «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия - 2 шт. (при необходимости),
и/или
- Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения: Cardiophon (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12207), «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия - 2 шт. (при необходимости),
- Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02, технические условия ГИКС.941329.102 ТУ (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2997), АО "Елатомский приборный завод", Россия - 1 шт. (при необходимости),
- Индикатор внутриглазного давления портативный ИГД-02 "ПРА" по БИРМ.941329.005 ТУ (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06397), АО "Государственный Рязанский приборный завод", Россия - 1 шт. (при необходимости),
- Приборы оптические диагностические для офтальмологии и принадлежности к ним/ Приборы оптические диагностические для офтальмологии/ Офтальмоскопы, исполнение: ti-score L (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03907) "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия - 1 шт. или 2 шт.,
и/или
- Офтальмоскоп PICCOLIGHT E50 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8089), "КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ", Германия - 1 шт. или 2 шт.,
и/или
- Офтальмоскопы прямые медицинские, в различных вариантах исполнения, с принадлежностями/ вариант исполнения: Офтальмоскоп прямой медицинский ВЕТА 200 S (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4244), "Хайне Оптотехник ГмбХ и Ко., КГ", Германия - 1 шт. или 2 шт.,
и/или
- Офтальмоскоп налобный бинокулярный НБО-3 по ТУ 3-3.2304-90 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10602), Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод", Россия - 1 шт. или 2 шт.,
и/или
- Офтальмоскоп ручной универсальный ОР-3Б "Блик" по ТУ 3-3.2303-91 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10601), Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод", Россия - 1 шт. или 2 шт.,
и/или
- Офтальмоскоп не прямой бинокулярный, варианты исполнения: офтальмоскоп не прямой OMEGA 600, офтальмоскоп не прямой SIGMA 250 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/22198), "ХАЙНЕ Оптотехник ГмбХ и Ко. КГ", Германия - 1 шт. или 2 шт.,
и/или
- Приборы оптические диагностические медицинские с принадлежностями, вариант исполнения: офтальмоскопы, модели OMEGA 500 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4414), "Хайне Оптотехник ГмбХ и Ко., КГ", Германия - 1 шт. или 2 шт.,
- Лампа щелевая офтальмологическая HS с принадлежностями вариант исполнения: HS-5500 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10647), "Хувитц Ко., Лтд", Корея – 1 шт.,
или
- Лампа щелевая ЛС-01-"Зенит" по ТУ 9442-006-07526142-2009 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06759), ПАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева», Россия – 1 шт.,
или
- Лампа щелевая офтальмологическая TSL-5000 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/11147), Томэй ГмбХ, Германия – 1 шт.,

86567070.941149.001-01

Лист

110

- Щелевая лампа офтальмологическая ручная модели XL-1 в комплекте с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4151), "Рексам Ко., Лтд.", Япония - 1 шт. (при необходимости),
- Стол приборный СП-01 в вариантах исполнения по ТУ 9452-001-86577849-2009 В следующем исполнении: Стол приборный СП-01-01 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04981), ООО "Красивая планета", Россия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Стол медицинский с электроприводом СО по ТУ 32.50.30-008-01324118 с принадлежностями: Вариант исполнения: Стол медицинский с электроприводом СО-1 по ТУ 32.50.30-008-01324118-2021 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17028), ООО "ТАГЛЕР", Россия - 1 шт. (при необходимости),
- Камера цифровая офтальмологическая Augora (Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8525) "Оптомед Оюй", Финляндия - 1 шт. (при необходимости),
- Комплект высокодиоптрийных асферических линз для диагностики и исследования глазных сред совместно с щелевыми лампами КЛА-01-"Поиск ТР" по ТУ 9398-001-18898190-2004 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03134), ООО "Поиск ТР", Россия - 1 компл. (при необходимости),
- Аппарат педикюрный Podolog с принадлежностями вариант исполнения: Podolog Eco (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13046) "Хельмут Рук ГмбХ", Германия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Аппарат процедурный с принадлежностями исполнение: PodoSprint 100SP (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/304) "ИОНТО Хелс энд Бьюти ГмбХ", Германия - 1 шт. (при необходимости),
- Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-03-"Я"-ФП по ТУ 9452-003-55307168-2004 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06570) ООО «Ферропласт Медикал», Россия - 1 шт.
или
- Камеры бактерицидные для хранения простерилизованных медицинских инструментов-"СПДС" по ТУ 9452-001-75620370-2010 Варианты исполнения: "СПДС-1-К", "СПДС-2-К", "СПДС-3-К" (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09347), ООО "СПДС", Россия - 1 шт.,
- Лампа бестеневая с увеличительной лупой с регулируемой интенсивностью освещения "АтисМед ЛЛ", с принадлежностями вариант исполнения: "АтисМед ЛЛ-3" (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4378), ООО "Атис Групп", Россия - 1 шт.,
или
- Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения: 9005LED (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12616), "НИНГБО ИНТБРАЙТ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД", Китай - 1 шт.,
- Индикатор ультразвуковой доплеровский оперативной диагностики скорости кровотока "Минидоп", исполнение: "Минидоп-8" по ТУ 9442-018-17201375-2013 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2045) АО "НПФ "БИОСС", Россия - 1 шт.,
или
- Анализатор скорости кровотока ультразвуковой СОНОМЕД 300М по ТУ 9442-300-31322051-2008, вариант исполнения: СОНОМЕД 300М-1В многофункциональный прибор для доплеровских обследований в D и M режимах, во внешнем специализированном корпусе (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04499), ООО "СПЕКТРОМЕД", Россия - 1 шт.,
- Анализатор ультразвуковой доплеровский скорости кровотока компьютеризированный "Ангиодин"-УК" по ТУ 9442-010-17201375-2005 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08233) АО "НПФ "БИОСС", Россия - 1 шт. (при необходимости),
- Система ультразвуковой визуализации универсальная серии МХ с принадлежностями, вариант исполнения: МХ7 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15226),

86567070.941149.001-01

Лист

111

"Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР - 1 шт. (при необходимости),

или

- Аппарат ультразвуковой диагностический DP-50 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10257), "Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", Китай - 1 шт. (при необходимости),

или

- Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid iq с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6506), "ДжиИ Медикал Системз (Китай) Ко., Лтд.", Китай - 1 шт. (при необходимости),

или

- Прибор цифровой ультразвуковой диагностический M5 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01996), "Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР - 1 шт. (при необходимости),

или

- Прибор ультразвуковой диагностический M7 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07629), "Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР - 1 шт. (при необходимости),

или

- Система ультразвуковая диагностическая медицинская Versana Active с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17101), "ДжиИ Медикал Системз (Китай) Ко., Лтд.", Китай - 1 шт. (при необходимости),

или

- Прибор ультразвуковой диагностический с принадлежностями Варианты исполнения: DUS 3, DUS 6, DUS 8, DUS 60, U50 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10381) "Эдан Инструментс, Инк.", Китай - 1 шт. (при необходимости),

или

- Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями, варианты исполнения: S2N, S8Exr, S9, S30 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1328) "СОНОСКЕЙП МЕДИКАЛ КОРП.", Китай - 1 шт. (при необходимости),

- Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках/ В отдельных упаковках/ Инструмент для диагностики нервной проводимости / вариант исполнения: busk (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08456), "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия - 1 шт.

или

- Молоток неврологический для исследования сухожильных рефлексов МН-"М-МИЗ" по ТУ 9439-034-07613473-2005 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06065), ОАО "Можайский медико-инструментальный завод", Россия - 1 шт.

- Инструмент медицинский для диагностики нервной и/или слуховой проводимости, в наборах или отдельных упаковках, варианты исполнения: по Риделю-Сейферу 64 Гц/128 Гц с подставкой, С-1 256 Гц (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08456), "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия - 1 шт. (при необходимости),

или

- Камертоны медицинские, вариант исполнения: Камертон с 128/с 64 Hz по Рюдель-Зейфферу из стали с демпферами (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18824), "Кирхнер & Вильгельм ГмбХ + Ко. КГ", Германия - 1 шт. (при необходимости),

- Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи по ТУ 9437-013-52777873-2014, вариант исполнения: Укладка для оказания скорой медицинской помощи УМСП-02-«МЕДПЛАНТ» общепрофильная / специализированная (реанимационная) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2746), ООО "МЕДПЛАНТ", Россия 1 шт. (при необходимости),

- Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 варианты исполнения: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-

86567070.941149.001-01

Лист

112

аварийного питания), светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100 П LT» (с блоком аварийного питания), светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100-01 П», светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100-01 П LT» (ПУ № ФСР 2009/05897), ЗАО "Завод ЭМА", Россия - 1 шт.,

– Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями варианты исполнения: Налобное зеркало ziegler, Гибкий осветитель ri-magic LED, Диагностический осветитель fortelux N, Набор ri-light (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12398), "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия - 1 шт. (при необходимости),

– Столик манипуляционный СМ - «МСК» по ТУ 9451-022-52962725-2008 в следующем исполнении: СМ548-«МСК» - СМ548-«МСК» (МСК-548) - столик манипуляционный передвижной металлический, на колесах, с двумя полками из нержавеющей стали и выдвижным ящиком (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02802), ООО "Медстальконструкция", Россия - 1 шт. (при необходимости),

– Столики медицинские инструментальные, вариант исполнения: Столик медицинский инструментальный СИ-07 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11706) ПУП "Ратон-МедТех", Республика Беларусь - 1 шт. (при необходимости),

– Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00268), Открытое акционерное общество "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина", Россия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Инструменты медицинские многоповерхностного воздействия (зажимные), с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12517), "Саммар Интернешен", Пакистан - 1 шт. (при необходимости),

– Ножницы медицинские по ТУ 32.50.13-003-39241292-2022 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20444), ООО "МИЗ-ТУМБОТИНО", Россия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Инструменты режущие по ТУ 9433-285-07613444-2010 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07370), ОАО "МИЗ им. М.Горького", Россия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Инструменты медицинские хирургические режущие (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02888), "СУРДЖИВЕЛЛ", Пакистан - 1 шт. (при необходимости),

– Лотки металлические медицинские ЛММ-«МЕДИКОН» по ТУ 9452-001-27846954-2008 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03233), ООО "НПФ "МЕДИКОН", Россия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Лоток полимерный почкообразный, с крышкой, ручкой и носиком для слива ЛПпо-1,75-ЕЛАТ" по ТУ 9398-007-24320270-2004 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00130), АО "ЕПЗ", Россия - 1 шт. (при необходимости),

– Дозаторы пипеточные "ЭКРОС" и "ЭКОХИМ" по ТУ 9452-046-23050963-2007 варианты исполнения: ЭКРОС - ОФ (вид 124480); ЭКРОС - ОП (вид 124480); ЭКРОС - МП (вид 124540); - ЭКОХИМ - ОФ (вид 124480); ЭКОХИМ - ОП (вид 124480); - ЭКОХИМ - МП (вид 124540); ЭКОХИМ - ОФА (вид 124480); ЭКОХИМ - ОПА (вид 124480) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2668), ООО "ЭКРОСХИМ", Россия - 2 шт. (при необходимости),

и/или

– Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объемами доз, одно- и многоканальные "Колор" по ТУ 9452-002-33189998-2007 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/01430), АО "Термо Фишер Сайентифик", Россия - 2 шт. (при необходимости),

и/или

86567070.941149.001-01

Лист

114

(Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16615), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),

– Набор для быстрого определения антигена SARS-CoV-2 (в мазках из носоглотки и ротоглотки) иммунофлуоресцентным методом (SARS-CoV-2 Antigen Fast Test Kit) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18079), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),

– Реагенты и расходные материалы к экспресс-анализаторам для определения гликозилированного гемоглобина, микроальбумина, креатинина "ДСА 2000" (DCA 2000), "ДСА Вантаж" (DCA Vantage) (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00974), "Сименс Хэлскеа Диагностикс Инк.", США – 1 компл. (при необходимости),

– Реагенты для биохимического анализатора SPOTCHEM (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00751), "АРКРЭЙ Фэктори, Инк.", Япония – 1 компл. (при необходимости),

– Материалы расходные для биохимического анализатора SPOTCHEM (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00750), "АРКРЭЙ Фэктори, Инк.", Япония – 1 компл. (при необходимости),

– Тест-полоски для биохимического анализатора SPOTCHEM (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2385), "АРКРЭЙ Фэктори, Инк.", Япония – 1 компл. (при необходимости),

– Набор тест-полосок для in vitro диагностики для количественного определения биохимических показателей в сыворотке или плазме крови на анализаторах биохимических SPOTCHEM (Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/21222), "АРКРЕЙ Фэктори, Инк.", Япония – 1 компл. (при необходимости),

– Тест-полоски и контрольные растворы для анализатора крови портативного биохимического EasyTouch (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11677), Биоптик Технолоджи, Инк., Тайвань – 1 компл. (при необходимости),

– Тест-полоски "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active) (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01205) "Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Германия – 1 компл. (при необходимости),

– Тест-полоски и контрольные растворы для экспресс-анализаторов биохимических портативных «Аккутренд» (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06626), "Рош Диагностикс ГмбХ", Германия – 1 компл. (при необходимости),

– Реагенты диагностические к анализаторам мочи моделей Н-50, Н-100, Н-300, Н-500, Н-800 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08127), "Дижуй Индастриал Ко., Лтд.", Китай – 1 компл. (при необходимости),

– Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче УРИГЛЮК-1 по ТУ 21.20.23-001-45677786-2018 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11001), ООО "Биосенсор АН", Россия – 1 компл. (при необходимости),

или

– Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения: глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-ХН по ТУ 21.20.23-007-45677786-2018 Вариант исполнения: Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения; глюкозы, белка, крови/гемоглобина, лейкоцитов, нитритов, кетоновых тел, pH, билирубина, уробилиногена, относительной плотности, аскорбиновой кислоты в моче Уриполиан-11А (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02809), ООО "Биосенсор АН", Россия – 1 компл. (при необходимости),

или

– Полоски индикаторные для определения скрытой крови, кетонов, глюкозы, белка, pH в моче БИОСКАН-ПЕНТА по ТУ 9398-006-33020495-2006 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13016), ООО "БИОСКАН", Россия – 1 компл. (при необходимости),

– Набор реагентов для иммунохроматографического выявления скрытой крови в кале человека (ИммуноХром-ГЕМ-Экспресс) по ТУ 9398-011-53915567-2005 (Регистрационное

86567070.941149.001-01

Лист

116

удостоверение № ФСР 2010/06858), ООО "МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА", Россия – 1 компл. (при необходимости),

– Наборы для анестезиологии и реанимации (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05211), "Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед", США – 1 шт. (при необходимости), или

– Набор одноразовый для устранения асфиксии (коникотомии) по ТУ 32.50.13-002-35453034-2017 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20321), ООО "НОВОПЛАСТ-М" Россия – 1 шт. (при необходимости).

Комплект выносного оборудования:

– Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06211), ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА", Россия – 1 шт. (при необходимости), или

– Анализаторы для определения глюкозы HemoCue Glucose 201+ и гемоглобина моделей HemoCue Hb 201+ и Plasma/Low Hb с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3622) "ХемоКью АБ", Швеция – 1 шт. (при необходимости), или

– Анализатор крови портативный биохимический EasyTouch® варианты исполнения: EasyTouch® G, EasyTouch® GC, EasyTouch® GHb, EasyTouch® GU, EasyTouch® GCU, EasyTouch® GCHb (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10454), Биоптик Технолоджи, Инк., Тайвань – 1 шт. (при необходимости),

– Анализатор биохимический Spotchem на основе принципа «сухой химии», в исполнении: модель EZ (SP-4430), с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13500), "АРКРЭЙ Фэктори, Инк.", Япония - 1 шт.* (при необходимости) или 2 шт.* (при необходимости),

или

– Экспресс-анализатор биохимический портативный "Аккутренд Плюс" (Accutrend Plus) с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02119), "Рош Диагностикс ГмбХ", Германия - 1 шт.* (при необходимости) или 2 шт.* (при необходимости),

или

– Экспресс-анализатор параметров крови портативный, с принадлежностями варианты исполнения: blueCare, multiCare-in (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10072), "Биокемикал Системз Интернэйшнл С.п.А.", италия - 1 шт.* (при необходимости) или 2 шт.* (при необходимости),

или

– Анализатор крови биохимический портативный, Варианты исполнения: CardioChek с принадлежностями, CardioChek PA с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2693), "Полимер Технолоджи Системс, Инк.", США - 1 шт.* (при необходимости) или 2 шт.* (при необходимости),

– Экспресс-анализатор для определения гликозилированного гемоглобина, микроальбумина, креатинина "ДСА Вантаж" (DCA Vantage) с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00973), "Сименс Хэлскеа Диагностикс Инк.", США - 1 шт.* (при необходимости) или 2 шт.* (при необходимости),

– Анализатор полуавтоматический Finescape™ FIA иммунофлуоресцентный для диагностики in vitro варианты исполнения FS-113, FS-205 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18037), "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай - 1 шт.* (при необходимости) или 2 шт.* (при необходимости),

или

– Анализатор Getein1100 для количественного определения биомаркеров иммунофлуоресцентным методом (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12609),

"Гетеин Биотек, Инк.", Китай - 1 шт.* (при необходимости) или 2 шт.* (при необходимости),

– Анализатор мочи модель: H-100 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2490) "Дижуй Индастриал Ко., Лтд.", КНР - 1 шт.* (при необходимости),
или

– Анализаторы мочи CL-50 Plus, CL-500 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3986) "Хай Текнолоджи, Инк.", США - 1 шт.* (при необходимости),
или

- Анализатор мочи на тест полосках URiSCAN-strip с принадлежностями по ТУ 9443-034-59879815-2012 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/761 ООО "Эйлитон", Россия) - 1 шт.* (при необходимости),
или

- Анализатор мочи URiSCAN, варианты исполнения: URiSCAN-Pro, URiSCAN-Optima (Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15101, "УайДи Диагностика КОРП.", Республика Корея) - 1 шт.* (при необходимости),

– Термоконтейнеры переносные для кратковременного хранения крови, кровезаменителей и биопрепаратов ТМ-«МОКА» Варианты исполнения: ТМ4; ТМ6; ТМ9; ТМ16; ТМ25; ТМ32; ТМ50 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/617), ООО "МОКА" (ООО "Мока"), Россия - 1 шт.* (при необходимости),
или

– Термоконтейнеры многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток и других лекарственных средств ТМ-"ТЕРМО-КОНТ МК" по ТУ 9452-005-13549456-2012
Варианты исполнения: ТМ-1, ТМ-5, ТМ-8, ТМ-20, ТМ-35, ТМ-52, ТМ-80. (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03885), ООО "Термо-Конт МК", Россия - 1 шт.* (при необходимости).

Системы жизнеобеспечения и вспомогательное оборудование:

Система отопления:

- Электрический обогреватель – 3 шт.,
- Электрический обогреватель – 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),
- Тепловая воздушная завеса – 1 шт.,
- Автономный отопитель – 1 шт.,
- Автономный отопитель – 1 шт. (при необходимости);

Система вентиляции:

- Приточная фильтро-вентиляционная установка – 1 шт.;

Система кондиционирования:

- Сплит-система – 1 компл.,

Система электроснабжения:

- Автономный генератор – 1 шт.,
- Преобразователь напряжения бортовой сети – 1 шт.,
- Зарядное устройство для аккумулятора – 1 шт.,
- 3-х проводной изолированный электрический кабель (с многожильными медными проводами) – 1 шт.,
- Однопроводной электрический кабель заземления (с многожильным медным проводом) – 1 шт.,
- Источник бесперебойного питания – 1 шт. (при необходимости),
- Стабилизатор напряжения – 1 шт. (при необходимости);

86567070.941149.001-01

Лист

118

Система освещения – 1 компл.;

Система водоснабжения:

- Водонагреватель – 1 компл. (при необходимости),
- Биотуалет – 1 шт. (при необходимости);

Система пожарной сигнализации и пожаротушения:

- Извещатель пожарный дымовой/ загазованности СО – 1 компл.,
- Огнетушитель – 2 шт.,

Средства связи – 1 компл.;

Видеорегистратор – 1 шт. (при необходимости);

Беспроводной маршрутизатор – 1 шт. (при необходимости);

Рабочее место врача (фельдшера) с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» и (или) рабочее место акушера (медицинской сестры) с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» – 1 компл. (при необходимости);

Мебель:

- Рабочий стол – 3 шт.,
- Рабочий стол – 1 шт. (при необходимости),
- Шкаф – 3 шт.,
- Шкаф – 1 шт. (при необходимости),
- Банкетка – 1 шт.,
- Стул – 3 шт.,
- Табурет – 3 шт. (при необходимости).

Эксплуатационная документация:

- Руководство по эксплуатации МЛПМ «Диагностика» – 1 шт.,
- Технический паспорт МЛПМ «Диагностика» – 1 шт.

3. Мобильный лечебно-профилактический модуль МЛПМ «Диагностика» по ТУ 29.10.59-017-86567070-2023, вариант исполнения 3, на базе БТС 57561Z, 57550Z, 57552Z, 57530Z, 47195Z, 47193Z, 87528Z, 87551Z, 87578Z

Состав:

- Базовое транспортное средство 57561Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 57550Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 57552Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 57530Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 47195Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или

86567070.941149.001-01

Лист

119

- Базовое транспортное средство 47193Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 87528Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 87551Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.,
или
- Базовое транспортное средство 87578Z (ООО «Автомеханический завод», Россия) – 1 шт.;

Медицинские изделия:

- Мебель медицинская складная "Поллюс" по ТУ 9452-007-59563632-2015, вариант исполнения: кушетка складная КС, с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4082), ООО "НПО "ПОЛЮС", Россия – 2 шт.,
и/или
- Мебель медицинская для кабинетов и палат по ТУ 9452-001-16789225-2016 / Кушетка смотровая: М111-039 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5521), ООО "Техсервис", Россия – 2 шт.,
и/или
- Кушетка медицинская по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018 вариант исполнения: МД КС-01 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8453), ООО "НПО ПРОМЕТ", Россия – 2 шт.,
- Ростомер медицинский Р-«МСК» по ТУ 9441-035-52962725-2014 вариант исполнения: Р-Ст-«МСК» (МСК 234) предназначенный для измерения роста человека стоя (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4294), ООО "Медстальконструкция", Россия – 1 шт. (при необходимости),
или
- Ростомеры по ТУ 9452-025-00226454-2006 вариант исполнения: РЭП; РЭС; РП; РС; РП (эконом); РЭП-И; РЭС-И (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11607), АО "ТВЕС", Россия – 1 шт. (при необходимости),
или
- Весы медицинские электронные напольного типа сеса, с принадлежностями (принадлежность Ростомер сеса 217) (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07366), "сека гмбх & ко. кг", Германия – 1 шт. (при необходимости),
- Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 по ТУ 9441-022-00226454-2005 варианты исполнения: ВМЭН-150-50/100-А, ВМЭН-200-50/100-А, ВМЭН-150-50/100-Д1-А, ВМЭН-150-50/100-И-Д1-А, ВМЭН-200-50/100-Д1-А, ВМЭН-200-50/100-И-Д1-А, ВМЭН-150-50/100-Д2-А, ВМЭН-150-50/100-И-Д2-А, ВМЭН-200-50/100-Д2-А, ВМЭН-200-50/100-И-Д2-А, ВМЭН-150-50/100-Д3, ВМЭН-150-50/100-И-Д3, ВМЭН-200-50/100-Д3, ВМЭН-200-50/100-И-Д3, ВМЭН-150-50/100-СТ-А, ВМЭН-150-50/100-И-СТ-А, ВМЭН-200-50/100-СТ-А, ВМЭН-200-50/100-И-СТ-А, ВМЭН-150-50/100-А-ЗВ, ВМЭН-200-50/100-А-ЗВ, ВМЭН-150-50/100-С-СТ-А, ВМЭН-150-50/100-С-И-СТ-А, ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А, ВМЭН-200-50/100-С-И-СТ-А, ВМЭН-150-50/100-С-Д1-А, ВМЭН-150-50/100-С-И-Д1-А, ВМЭН-200-50/100-С-Д1-А, ВМЭН-200-50/100-С-И-Д1-А (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/09964), Открытое акционерное общество "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", Россия – 1 шт. (при необходимости),
или
- Весы электронные медицинские ВЭМ-150-"Масса-К" по ТУ 4274-017-27450820-2008 варианты исполнения: ВЭМ-150.3-А1 без стойки с тремя интервалами взвешивания, ВЭМ-150.3-А2 с круглой вращающейся стойкой с тремя интервалами взвешивания (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02905), АО "МАССА-К", Россия - 1 шт. (при необходимости),

[illegible]

- Тонометр механический с принадлежностями, вариант исполнения: big ben (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11768), «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),
- Измерители артериального давления серии ИАД-01-"Адьютор" по ТУ 26.60.12-003-58286981-2019 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12919), ООО "Адьютор", Россия - 1 шт.,
или
- Измеритель артериального давления механический ИАДМ - "ТРИВЕС-ПЧЗ-М" по ТУ 9441-002-33094849-2005 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08666), ООО "Тривес", Россия - 1 шт.,
или
- Измеритель артериального давления мембранный ИАДМ-01-Медтехника с принадлежностями по ТУ 9441-015-27418804-2007 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/01763), ООО "МЕДТЕХНИКА", Россия - 1 шт.,
или
- Измеритель артериального давления CS Medica CS-105 в комплекте (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04070), "Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.", Китай - 1 шт.,
или
- Приборы для измерения артериального давления моделей PRO-60, MED-61, MED-62, MED-63 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7689), "Би.Велл Свисс АГ", Швейцария - 1 шт.,
или
- Тонометр механический с принадлежностями, варианты исполнения: R1-shock proof; minimus II; minimus III; precisa N; e-mega; ri-san; exacta; sphygmotensiophone; babyphon; sanaphon (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11768), "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия - 1 шт.,
- Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON: M3 Expert (HEM-7132-ALRU) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3210), "ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд.", Япония - 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),
- Стетоскоп акушерский деревянный Сад-"М-МИЗ" по ТУ 9398-093-07613473-2003 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00767), ОАО "Можайский медико-инструментальный завод", Россия - 1 шт. (при необходимости),
- Стетофонендоскоп CS Medica вариант исполнения: Стетофонендоскоп CS Medica CS-421 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04072), «Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.», Китай - 2 шт.,
и/или
- Стетофонендоскопы «СФ-Адьютор» по ТУ 26.60.12-002-58286981-2019, варианты исполнения: стетофонендоскоп СФ-01-"Адьютор" с односторонней фонендоскопической головкой для аускультации тонов Короткова у взрослых; стетофонендоскоп СФ-02-"Адьютор" с двусторонней фонендоскопической и стетоскопической головкой для детей для аускультации тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03-"Адьютор" Раппорта с серыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03У-"Адьютор" Раппорта с серыми удлиненными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.1-"Адьютор" Раппорта с синими трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.2-"Адьютор" Раппорта с розовыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов,

86567070.941149.001-01

Лист

121

легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.3-"Адютор" Раппопорта с оранжевыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.4-"Адютор" Раппопорта с зелеными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.5-"Адютор" Раппопорта с черными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.6-"Адютор" Раппопорта с красными трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.7-"Адютор" Раппопорта с желтыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей; стетофонендоскоп СФ-03.8-"Адютор" Раппопорта с фиолетовыми трубками звукопровода с набором стетоскопических и фонендоскопических головок и комплектом ЗИП для аускультации сердца, сосудов, легких и тонов Короткова у взрослых и детей (Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1813) ООО "АДЬЮТОР", Россия) - 2 шт.,

и/или

– Стетофонендоскоп Б.Е.Вотчала СФОН-01 по ТУ 64-1-3121-77 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07228), Закрытое акционерное общество "Нижнетагильский медико-инструментальный завод", Россия - 2 шт.,

и/или

– Стетофонендоскоп CS Medica CS-417 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04073), "Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.", Китай - 2 шт.,

и/или

– Стетофонендоскоп CS Medica CS-422 Premium (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6524), "Шэньчжень Комплектсервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.", КНР – 2 шт.,

– Электронный стетофонендоскоп Littmann варианты исполнения: 3100; 3200 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07526), "3М Компани, 3М Хелс Кеар", США - 1 шт. (при необходимости),

– Термометры электронные, вариант исполнения: DT-623 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09384), "Вега Текнолоджис Инк.", Китай – 1 шт. (при необходимости),

или

– Термометр электронный медицинский OMRON Eco Temp Basic (MC-246-RU) (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05423), OMRON ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., Япония – 1 шт. (при необходимости),

или

– Термометр инфракрасный бесконтактный TOPMED с принадлежностями, варианты исполнения: NC-178, NC-186, NC-192 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7384), "Гуанчжоу Цзиньсиньбао Электроник Ко., Лтд.", КНР – 1 шт. (при необходимости),

или

Термометры медицинские инфракрасные SENSITEC, варианты исполнения: бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NF-3102, бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NF-3101, бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NF-3103, бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NB-401, бесконтактный инфракрасный термометр SENSITEC NB-402, инфракрасный термометр SENSITEC ET-211 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10946), "Алексмед Интериэшил Б. В.", Нидерланды – 1 шт. (при необходимости),

86567070.941149.001-01

Лист

122

– Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-«Р-Д» по ТУ 2660-005-24149103-2018, варианты исполнения: ЭК12Т-01-«Р-Д»/141, МТЦ.31.00.000, ЭК12Т-01-«Р-Д»/260 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14015), ООО «НПП «Монитор», Россия - 1 шт.,

или

– Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 "АКСИОН" с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 9441-112-43674401-2004 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/01874), ОАО Концерн "Аксион", Россия – 1 шт.,

или

– Комплекс аппаратно-программный "Валента" для проведения исследований функциональной диагностики по ТУ 9441-001-80502299-2007 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00259, ООО "Компания Нео", Россия) – 1 шт.,

– Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД "Валента" по ТУ 9441-002-80502299-2007 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00260) ООО "Компания Нео", Россия - 1 шт. (при необходимости) или 3 шт. (при необходимости),

или

– Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Медиком-комби» по ТУ 9442-001-86580521-2014 в составе с регистратором КР-06 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2451), ООО "МЕДИКОМ", Россия - 1 шт. (при необходимости) или 3 шт. (при необходимости),

– Система для снятия и анализа ЭКГ при нагрузках DIXION STRESS ECG ST-1212 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04619), "Эдан Инструментс, Инк.", Китай - 1 компл. (при необходимости),

или

– Комплекс для нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ и реабилитации с биологической обратной связью по ТУ 26.60.12-041-13218158-2018, Варианты исполнения: Комплектация для нагрузочного тестирования и для проведения физических тренировок под контролем ЭКГ (включая кардиореабилитацию), в том числе с использованием биологической обратной связи, "Мультитренер", Комплектация для нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ "Эргопойнт" (Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8689), ООО "Нейрософт", Россия Китай - 1 компл. (при необходимости),

или

– Комплекс аппаратно-программный электрокардиографический для нагрузочных проб "Альтон-тест" по ТУ 9441-070-56723727-2002 Варианты исполнения: Исполнение ГКУН.944183.070-01, Исполнение ГКУН.944183.070-02 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13610), ООО "АЛЬТОНИКА", Россия - 1 компл. (при необходимости),

– Пульсоксиметр медицинский "Armed", вариант исполнения: УХ301 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07461), "Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.", Китай – 1 шт. (при необходимости),

или

– Пульсоксиметр для определения частоты пульса и насыщения гемоглобина крови кислородом ПО-02-«КАРДЕКС» по ТУ 9441-003-25630854-00 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02293), ООО "КАРДЕКС", Россия - 1 шт. (при необходимости),

– Устройство-спиротест цифровое скринингового определения жизненной емкости легких и объема первого секундного форсированного выдоха портативное УСПЦ-01 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00694), ООО "МИТК-М", Россия – 1 шт. (при необходимости),

или

– Устройство мониторинга параметров внешнего дыхания человека, портативное цифровое "Спиротест УСПЦ-01М" по ТУ 26.60.12-003-18859607-2020, в составе с

принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18043, ООО "МИТК-М", Россия) - 1 шт. (при необходимости),

или

– Аппараты для спирометрии и пульсоксиметрии MIR с принадлежностями мод.: Spirobank I/G/II (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5323), "МИР С.р.л. - МЕДИКАЛ ИНТЕРНЕШНЛ РИСЕРЧ", Италия – 1 шт. (при необходимости),

или

– Спирометр автономный запоминающий MAC2 с принадлежностями, варианты исполнения MAC2-Б, MAC2-С, MAC2-ПК, MAC2-БМ, MAC2-ПКм (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5851), ООО "Белинтелмед", Республика Беларусь – 1 шт. (при необходимости),

– Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина крови гемиглобинцианидным методом АГФ-03/540 - «Минигем» по ТУ 9443-022-11254896-2009 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06211), ООО НПП "ТЕХНОМЕДИКА", Россия – 1 шт. (при необходимости),

или

– Анализаторы для определения глюкозы HemoCue Glucose 201+ и гемоглобина моделей HemoCue Hb 201+ и Plasma/Low Hb с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3622) "ХемоКью АБ", Швеция – 1 шт. (при необходимости),

или

– Анализатор крови портативный биохимический EasyTouch® варианты исполнения: EasyTouch® G, EasyTouch® GC, EasyTouch® GHb, EasyTouch® GU, EasyTouch® GCU, EasyTouch® GCHb (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10454), Биоптик Технолоджи, Инк., Тайвань – 1 шт. 1 шт. (при необходимости),

– Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови "Акку-Чек Актив" (Accu-Chek Active) с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00817), "Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Германия – 1 шт. (при необходимости),

или

– Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный ПКГ-02.4 "Сателлит плюс" в комплекте с полоской электрохимической однократного применения ПКГЭ-02.4 по ТУ 9443-002-78939528-2006 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12519), ООО "Компания "ЭЛТА", Россия – 1 шт. (при необходимости),

или

– Система контроля уровня глюкозы крови (глюкометр) «Акку-Чек® Инстант» (Accu-Chek® Instant) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13212), "Рош Диабетс Кеа ГмбХ", Германия – 1 шт. (при необходимости),

– Дефибриллятор PRIMEDIC HeartSave (M250) в вариантах исполнения с принадлежностями: варианты исполнения: HeartSave PAD (M250), HeartSave AED (M250), HeartSave AED-M (M250), HeartSave 6 (M250) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6871), «Метракс ГмбХ», Германия - 1 шт.,

или

– Дефибрилляторы SCHILLER с принадлежностями: FRED мод. easy (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4584) "Шиллер АГ", Швейцария - 1 шт.,

или

– Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н по ТУ 9444-228-49640047-2015 Вариант исполнения: Дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-01 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5391), ООО Концерн "Аксион", Россия - 1 шт.,

или

– Дефибрилляторы серии PRIMEDIC с принадлежностями варианты исполнения: PRIMEDIC DEFI-N (M100), PRIMEDIC DEFI-B (M110) (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10093), Метракс ГмбХ, Германия - 1 шт.,

– Инструменты оттесняющие по ТУ 9434-293-07610776-2010 (Регистрационное удостоверение ФСР 2011/10303), ОАО "МИЗ-Ворсма", Россия - 1 шт. (при необходимости)

или

– Инструменты медицинские хирургические, вариант исполнения: инструменты поверхностного воздействия, зажимные, вспомогательные: щипцы: зажимной инструмент: J-33-500 - J-33-560 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3121), "Сурджикон ЛТД", Пакистан - 1 шт. (при необходимости),

– Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-3-«КРОНТ» по ТУ 9451-029-11769436-2006, варианты исполнения: «Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ», «Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ» (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11388), АО "КРОНТ-М", Россия - 3 шт. или 4 шт.,

или

– Облучатель-рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный ОРУБ-2-01-«КРОНТ» по ТУ 9451-019-11769436-2003, варианты исполнения: настенный ОРУБн2-01-«КРОНТ» (Дезар-2н), передвижной ОРУБп2-01- «КРОНТ» (Дезар-2п) (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12132), АО "КРОНТ-М", Россия – 3 шт. или 4 шт.,

или

– Рециркулятор УФ-бактерицидный трехламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений РБ-20-«Я-ФП» по ТУ 9451-020-55307168-2012, варианты исполнения: РБ-20-«Я-ФП»-01 (модели: РБ-20-«Я-ФП»-01, РБ-20-«Я-ФП»-01П); РБ-20-«Я-ФП»-02 (модели: РБ-20-«Я-ФП»-02, РБ-20-«Я-ФП»-02П) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/654), ООО Общество с ограниченной ответственностью "Ферропласт Медикал"("Ферропласт Медикал"), Россия – 3 шт. или 4 шт.,

или

– Рециркуляторы УФ-бактерицидные для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей "СПДС" по ТУ 9451-002-75620370-2010 варианты исполнения: "СПДС-50-Р", "СПДС-100-Р" (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09816), ООО "СПДС", Россия - 3 шт. или 4 шт.,

– Холодильники фармацевтические по ТУ 9452-168-07503307-2004, вариант исполнения: ХФ-140«ПОЗИС» (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05705), АО "ПОЗиС", Россия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Оборудование медицинское для хранения лекарственных средств и вакцин НУС с принадлежностями вариант исполнения: НУС-68 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08608), "Циндао Хайер Биомедикал Ко., Лтд.", Китай - 1 шт. (при необходимости),

или

– Камеры холодильные медицинские "Бирюса" по ТУ 28.25.13-020-07550181-2019 Варианты исполнения: "Бирюса 150К-Г", "Бирюса 150К-Р", "Бирюса 150К-GB", "Бирюса 150К-RB" (Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9387), ОАО "КЗХ "Бирюса", Россия - 1 шт. (при необходимости),

или

– Холодильник фармацевтический двухкамерный по ТУ 9452-207-07503307-2014, модели: ХФД-280 «POZIS», ХФД-280-1 «POZIS» (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3531), АО "ПОЗиС", Россия - 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),

– Шкафы медицинские по ГИКС.942810.107 ТУ, вариант исполнения: шкаф медицинский навесной для фармпрепаратов (Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9071), АО "ЕПЗ", Россия - 1 шт.,

или

86567070.941149.001-01

Лист

125

- Мебель медицинская по ТУ РБ 600182902.004-2003, варианты исполнения: шкаф медицинский навесной Н2, шкаф медицинский навесной Н2/А (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5288), ЗАО "СТРУМ", Республика Беларусь – 1 шт. (при необходимости),
или
- Мебель медицинская по ТУ 9452-001-86573969-2012, вариант исполнения: шкаф навесной одностворчатый М-ШН-40 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13501), ООО "МЕДЕЛИЯ", Россия – 1 шт. (при необходимости),
- Емкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО по ТУ 9451-001-24320270-99 с принадлежностями, варианты исполнения: ЕДПО-1-01, ЕДПО-1-01-2, ЕДПО-1-02, ЕДПО-1-02-2, ЕДПО-3-01-2, ЕДПО-3-02-2 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05373), АО "ЕПЗ", Россия - 3 шт. (при необходимости),
- Контейнеры одноразовые, многоразовые для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов МК «МедКом» по ТУ 9398-004-63102960-2012 вариант исполнения: Контейнер (бак) многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов классов А, Б, В, Г МК-03 «МедКом» (вид 123680), объемом 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0 л, с принадлежностью-колесная опора «МедКом» (Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14154) ООО «НПФ «МедКом», Россия - 3 шт. (при необходимости),
- Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями. Класс А (Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2254) ООО "ИННОВАЦИЯ", Россия - 2 шт. (при необходимости),
- Емкости-контейнеры для сбора и транспортировки биоматериалов для лабораторных исследований, острого инструментария и органических медицинских отходов класса А, Б, В, Г по ТУ 22.22.14-001-21109965-2017 с принадлежностями. Класс Б (Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2254), ООО "ИННОВАЦИЯ", Россия - 2 шт.,
или
- Контейнеры одноразовые, многоразовые для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов МК «МедКом» по ТУ 9398-004-63102960-2012, вариант исполнения: контейнер (бак) многоразовый для сбора, хранения и транспортирования медицинских отходов классов А, Б, В, Г МК-03 «МедКом» (вид 123680), объемом 10,0; 12,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0; 35,0; 40,0; 45,0; 50,0; 55,0; 60,0; 65,0; 70,0; 75,0; 80,0 л, с принадлежностью - колесная опора «МедКом» (Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/14154), ООО «НПФ «МедКом», Россия- 2 шт.,
- Сумка-укладка врача общей практики с наборами медицинскими диагностическими СУВОП-"ДжиСиМед" по ТУ 9398-001-86567070-2009, вариант исполнения: СУВОП-1, СУВОП-2, СУВОП-3, СУВОП-4, СУВОП-5, СУВОП-6 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/06761), ООО "ДжиСиМед", Россия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Набор изделий для врача общей практики НВОП-01-"МЕДИНТ-М" в сумке универсальной СМУ-03 по ТУ 32.50.13-012-18585567-2005 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08890), ООО "МЕДПЛАНТ", Россия - 1 шт. (при необходимости),
- Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения: Duplex (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12207), «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия - 2 шт. (при необходимости),
и/или
- Стетоскоп с принадлежностями, вариант исполнения: Cardiophon (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12207), «Рудольф Ристер ГмбХ», Германия - 2 шт. (при необходимости),

- Анализатор биохимический Spotchem на основе принципа «сухой химии», в исполнении: модель EZ (SP-4430), с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13500), "АРКРЭЙ Фэктори, Инк.", Япония - 1 шт. (при необходимости),
или
- Экспресс-анализатор биохимический портативный "Аккутренд Плюс" (Accutrend Plus) с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02119), "Рош Диагностикс ГмбХ", Германия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Экспресс-анализатор параметров крови портативный, с принадлежностями варианты исполнения: blueCare, multiCare-in (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10072), "Биокемикал Системз Интернэйшнл С.п.А.", италия - 1 шт. (при необходимости),
или
- Анализатор крови биохимический портативный, Варианты исполнения: CardioChek с принадлежностями, CardioChek PA с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2693), "Полимер Технолоджи Системс, Инк.", США - 1 шт. (при необходимости),
- Система ультразвуковой визуализации универсальная серии МХ с принадлежностями, вариант исполнения: МХ7 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15226), "Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР - 1 шт.,
или
- Аппарат ультразвуковой диагностический DP-50 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10257), "Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", Китай - 1 шт.,
или
- Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid iq с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6506), "ДжиИ Медикал Системз (Китай) Ко., Лтд.", Китай - 1 шт.,
или
- Прибор цифровой ультразвуковой диагностический М5 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01996), "Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР - 1 шт.,
или
- Прибор ультразвуковой диагностический М7 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07629), "Шэньчжэнь Майндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.", КНР - 1 шт.,
или
- Система ультразвуковая диагностическая медицинская Versana Active с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17101), "ДжиИ Медикал Системз (Китай) Ко., Лтд.", Китай - 1 шт.,
или
- Прибор ультразвуковой диагностический с принадлежностями Варианты исполнения: DUS 3, DUS 6, DUS 8, DUS 60, U50 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10381) "Эдан Инструментс, Инк.", Китай - 1 шт.,
или
- Аппарат ультразвуковой диагностический с принадлежностями, варианты исполнения: S2N, S8Exp, S9, S30 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1328) "СОНОСКЕЙП МЕДИКАЛ КОРП.", Китай - 1 шт.,
- Анализатор полуавтоматический Fineware™ FIA иммунофлуоресцентный для диагностики in vitro варианты исполнения FS-113, FS-205 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18037), "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай - 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),
или

- Анализатор Getein1100 для количественного определения биомаркеров иммунофлуоресцентным методом (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12609), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай - 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),
- Укладки и наборы для оказания скорой медицинской помощи по ТУ 9437-013-52777873-2014, вариант исполнения: Укладка для оказания скорой медицинской помощи УМСП-02-«МЕДПЛАНТ» общепрофильная / специализированная (реанимационная) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2746), ООО "МЕДПЛАНТ", Россия 1 шт. (при необходимости),
- Укладка врача скорой медицинской помощи для хранения и транспортировки лекарственных средств, инструментов и других медицинских изделий УМСП-01 по ТУ 9437-006-52777873-2010 варианты исполнения: в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-П; в пластиковом футляре-саквояже УМСП-01-Пм; в сумке тканевой каркасной УМСП-01-С; в металлическом футляре УМСП-01-М (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07335), ООО "МЕДПЛАНТ", Россия - 1 шт. (при необходимости),
- Аппараты дыхательные ручные АДР-МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н и комплекты дыхательные для ручной ИВЛ КД-МП-В, КД-МП-Д и КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00439), ООО "МЕДПЛАНТ", Россия - 1 шт.,
- или
- Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом первой помощи по ТУ 9444-169-17493159-2002 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08608), ООО "МИТК-М", Россия - 1 шт.,
- или
- Аппарат искусственной вентиляции легких ручной полевой ДП-11 по 9В2.933.226ТУ (Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04397), АО "КАМПО", Россия - 1 шт.,
- или
- Мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения в следующих исполнениях: мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения, неонатальный, мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения, детский, мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения, взрослый (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6725), ООО "Ассомедика", Республика Беларусь - 1 шт.,
- Анализаторы гематологические автоматические "ГЕМАЛАЙТ" по ТУ 9443-011-74487176-2007 модель "ГЕМАЛАЙТ 1270" (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00675) ООО "ДИКСИОН", Россия) - 1 шт. (при необходимости),
- или
- Анализатор гематологический MicroCC с принадлежностями варианты исполнения: MicroCC-18 MicroCC-20Plus (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07756), "Хай Текнолоджи, Инк.", США - 1 шт. (при необходимости),
- Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» по ТУ 9452-037-11769436-2010 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10034), АО "КРОНТ-М", Россия - 2 шт. (при необходимости),
- или
- Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП по ТУ 9452-156-05519988-2006, варианты исполнения: Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-10; Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-20; Штатив лабораторный полимерный для пробирок ШЛПП-40 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11883), ООО "Полимерные изделия", Россия - 2 шт. (при необходимости),
- Центрифуга лабораторная медицинская настольная "Armed" варианты исполнения: LC-04А, LC-04В, HC-12С (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/10939), "Зенит Лаб (Цзянсу) Ко., Лтд.", Китай - 1 шт. (при необходимости),
- или
- Центрифуга Таглер настольная лабораторная медицинская по ТУ 28.29.41-004-01324118-2017 с принадлежностями, варианты исполнения: СМ-12, СМ-12М, ОПН-8М,

(Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9166), ООО "ТАГЛЕР", Россия - 1 шт. (при необходимости),

– Светильники медицинские с принадлежностями, вариант исполнения: KaWe Masterlight (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4777), "КИРХНЕР & ВИЛЬГЕЛЬМ ГмбХ + Ко. КГ", Германия - 1 шт.,

или

– Светильники медицинские АРМЕД по ТУ 9452-005-13391002-2014 вариант исполнения: - АРМЕД-ЛД-2-ЛЕД (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4059), ООО "НПЦ МТ "АРМЕД", Россия - 1 шт.,

или

– Светильники передвижные "ЭМАЛЕД" в вариантах исполнения по ТУ 9452-015-46655261-2011: светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100 П» (с блоком аварийного питания), светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100 П LT» (с блоком аварийного питания), светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100-01 П», светильник смотровой передвижной «ЭМАЛЕД 100-01 П LT» (ПУ № ФСР 2009/05897), ЗАО "Завод ЭМА", Россия - 1 шт.,

– Оборудование смотровое медицинское с принадлежностями варианты исполнений: Налобное зеркало ziegler, Гибкий осветитель ri-magic LED, Диагностический осветитель fortelux N, Набор ri-light (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12398), "Рудольф Ристер ГмбХ", Германия - 1 шт. (при необходимости),

– Столик манипуляционный СМ - «МСК» по ТУ 9451-022-52962725-2008 в следующем исполнении: СМ548-«МСК» - СМ548-«МСК» (МСК-548) - столик манипуляционный передвижной металлический, на колесах, с двумя полками из нержавеющей стали и выдвижным ящиком (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02802), ООО "Медстальконструкция", Россия - 1 шт. (при необходимости),

– Столики медицинские инструментальные, вариант исполнения: Столик медицинский инструментальный СИ-07 (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/11706) ПУП "Ратон-МедТех", Республика Беларусь - 1 шт. (при необходимости),

– Дозаторы пипеточные "ЭКРОС" и "ЭКОХИМ" по ТУ 9452-046-23050963-2007 варианты исполнения: ЭКРОС - ОФ (вид 124480); ЭКРОС - ОП (вид 124480); ЭКРОС - МП (вид 124540); - ЭКОХИМ - ОФ (вид 124480); ЭКОХИМ - ОП (вид 124480); - ЭКОХИМ - МП (вид 124540); ЭКОХИМ - ОФА (вид 124480); ЭКОХИМ - ОПА (вид 124480) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2668), ООО "ЭКРОСХИМ", Россия - 2 шт. (при необходимости),

и/или

– Дозаторы пипеточные с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объемами доз, одно- и многоканальные "Колор" по ТУ 9452-002-33189998-2007 (Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/01430), АО "Термо Фишер Сайентифик", Россия - 2 шт. (при необходимости),

и/или

– Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, "Техно" по ТУ 9443-009-33189998-2009 (ПУ № ФСР 2009/06508), АО "Термо Фишер Сайентифик", Россия - 2 шт. (при необходимости).

Расходные медицинские изделия:

– Набор реагентов для быстрого количественного определения сердечного тропонина I (сTn I) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finescare™ FIA для диагностики in vitro (сTn I Rapid Quantitative Test) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17581), "Гуанчжоу Вондфо Биотек Ко., Лтд.", Китай – 1 компл. (при необходимости),

– Набор реагентов для быстрого количественного определения D-димера (DD) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finescare™ FIA для диагностики in vitro (D-Dimer Rapid Quantitative Test) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17523), "Гуанчжоу Вондфо Байотек Ко., Лтд.", Китай – 1 компл. (при необходимости),

86567070.941149.001-01

Лист

129

- Набор реагентов для быстрого количественного определения N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finescare? FIA для диагностики in vitro (NT-proBNP Rapid Quantitative Test) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16838, "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Набор реагентов для быстрого количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе FinescareTM FIA для диагностики in vitro (HbA1c Rapid Quantitative Test) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16827), "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Набор реагентов для быстрого количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе Finescare? FIA для диагностики in vitro (PCT Rapid Quantitative Test) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16845), "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Набор реагентов для быстрого количественного определения тиреотропного гормона (TSH) иммунофлуоресцентным методом на анализаторе FinescareTM FIA для диагностики in vitro (TSH Rapid Quantitative Test) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17525), "Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко., Лтд.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Набор реагентов для количественного определения сердечного тропонина I (cTnI) иммунофлуоресцентным методом (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/11565), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Набор реагентов для количественного определения сердечного изофермента креатинкиназы, тропонина I, миоглобина (СК-МВ/cTnI/Myo) иммунофлуоресцентным методом (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/11493), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Набор реагентов для количественного определения N-терминального мозгового натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) иммунофлуоресцентным методом (Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13774), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Набор для быстрого количественного определения С-реактивного белка (hs-CRP+CRP) (в сыворотке, плазме и цельной крови человека) иммунофлуоресцентным методом (hs-CRP+CRP FastTestKit) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16802), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (PCT) иммунофлуоресцентным методом (PCT Fast Test kit (Immunofluorescence Assay)) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16697), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Набор реагентов для количественного определения D - димера (D - dimer) иммунофлуоресцентным методом (D-dimer Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16615), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Набор для быстрого определения антигена SARS-CoV-2 (в мазках из носоглотки и ротоглотки) иммунофлуоресцентным методом (SARS-CoV-2 Antigen Fast Test Kit) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18079), "Гетеин Биотек, Инк.", Китай – 1 компл. (при необходимости),
- Реагенты для биохимического анализатора SPOTCHEM (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00751), "АРКРЭЙ Фэктори, Инк.", Япония – 1 компл. (при необходимости),
- Материалы расходные для биохимического анализатора SPOTCHEM (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00750), "АРКРЭЙ Фэктори, Инк.", Япония – 1 компл. (при необходимости),

86567070.941149.001-01

Лист

130

или

– Анализаторы мочи CL-50 Plus, CL-500 с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3986) "Хай Текнолоджи, Инк.", США - 1 шт.* (при необходимости),

или

- Анализатор мочи на тест полосках URiSCAN-strip с принадлежностями по ТУ 9443-034-59879815-2012 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/761 ООО "Эйлитон", Россия) - 1 шт.* (при необходимости),

или

- Анализатор мочи URiSCAN, варианты исполнения: URiSCAN-Pro, URiSCAN-Optima (Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15101, "УайДи Диагностикс КОРП.", Республика Корея) - 1 шт.* (при необходимости),

– Термоконтейнеры переносные для кратковременного хранения крови, кровезаменителей и биопрепаратов ТМ-«МОКА» Варианты исполнения: ТМ4; ТМ6; ТМ9; ТМ16; ТМ25; ТМ32; ТМ50 (Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/617), ООО "МОКА" (ООО "Мока"), Россия - 1 шт.* (при необходимости),

или

– Термоконтейнеры многоразового использования для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток и других лекарственных средств ТМ-"ТЕРМО-КОНТ МК" по ТУ 9452-005-13549456-2012 Варианты исполнения: ТМ-1, ТМ-5, ТМ-8, ТМ-20, ТМ-35, ТМ-52, ТМ-80. (Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03885), ООО "Термо-Конт МК", Россия - 1 шт.* (при необходимости).

Системы жизнеобеспечения и вспомогательное оборудование:

Система отопления:

- Электрический обогреватель – 3 шт.,
- Электрический обогреватель – 1 шт. (при необходимости) или 2 шт. (при необходимости),
- Тепловая воздушная завеса – 1 шт.,
- Автономный отопитель – 1 шт.,
- Автономный отопитель – 1 шт. (при необходимости);

Система вентиляции:

- Приточная фильтро-вентиляционная установка – 1 шт.;

Система кондиционирования:

- Сплит-система – 1 компл.,

Система электроснабжения:

- Автономный генератор – 1 шт.,
- Преобразователь напряжения бортовой сети – 1 шт.,
- Зарядное устройство для аккумулятора – 1 шт.,
- 3-х проводной изолированный электрический кабель (с многожильными медными проводами) – 1 шт.,
- Однопроводной электрический кабель заземления (с многожильным медным проводом) – 1 шт.,
- Источник бесперебойного питания – 1 шт. (при необходимости),
- Стабилизатор напряжения – 1 шт. (при необходимости);

Система освещения – 1 компл.;

Система водоснабжения:

- Водонагреватель – 1 компл. (при необходимости),

86567070.941149.001-01

Лист

132

– Биотуалет – 1 шт. (при необходимости);

Система пожарной сигнализации и пожаротушения:

- Извещатель пожарный дымовой/ загазованности СО – 1 компл.,
- Огнетушитель – 2 шт.,

Средства связи – 1 компл.;

Видеорегистратор – 1 шт. (при необходимости);

Беспроводной маршрутизатор – 1 шт. (при необходимости);

Рабочее место врача (фельдшера) с персональным компьютером и выходом в информа-ционно-коммуникационную сеть «Интернет» и (или) рабочее место акушера (медицин- ской сестры) с персональным компьютером и выходом в информа ционно-коммуникационную сеть «Интернет» – 1 компл. (при необходимости);

Мебель:

- Рабочий стол – 3 шт.,
- Рабочий стол – 1 шт. (при необходимости),
- Шкаф – 3 шт.,
- Шкаф – 1 шт. (при необходимости),
- Банкетка – 1 шт.,
- Стул – 3 шт.,
- Табурет – 3 шт. (при необходимости).

Эксплуатационная документация:

- Руководство по эксплуатации МЛПМ «Диагностика» – 1 шт.,
- Технический паспорт МЛПМ «Диагностика» – 1 шт.

14 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Данные по электромагнитной совместимости

Электромагнитная совместимость обеспечивается выполнением требований ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014.

ВНИМАНИЕ!

Мобильный лечебно-профилактический модуль МЛПМ «Диагностика» по ТУ 29.10.59-017-86567070-2023 - требует применения специальных мер для обеспечения ЭМС и должны быть установлены и введены в эксплуатацию в соответствии с информацией, относящейся к ЭМС, приведенной в эксплуатационной документации.

ВНИМАНИЕ!

Применение мобильных радиочастотных средств связи может оказывать воздействие на мобильный лечебно-профилактический модуль МЛПМ «Диагностика» по ТУ 29.10.59-017-86567070-2023.

ВНИМАНИЕ!

Использование принадлежностей, преобразователей и кабелей, не указанных в перечне, за исключением преобразователей и кабелей, поставляемых изготовителем Модуля в качестве сменных частей для внутренних деталей, может привести к увеличению электромагнитной эмиссии или снижению помехоустойчивости Модуля.

Таблица Б.1

Руководство и декларация изготовителя - электромагнитная эмиссия		
Комплекс предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю Комплекса следует обеспечить ее применение в указанной обстановке		
Испытание на электромагнитную эмиссию	Соответствие	Электромагнитная обстановка - указания
Радиопомехи по СИСПР 11	Группа 1	Комплекс использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведет к нарушениям Функционирования расположенного вблизи электронного оборудования
Радиопомехи по СИСПР 11	Класс В	Комплекс пригоден для применения в любых местах размещения, включая жилые дома и здания, непосредственно подключенные к распределительной электрической сети, питающей жилые дома
Гармонические составляющие потребляемого тока по МЭК 61000-3-2	Класс А	
Колебания напряжения и фликер по МЭК 61000-3-3	Соответствует	

86567070.941149.001-01

Лист

134

Таблица Б.2

Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость			
Комплекс предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю Комплекса следует обеспечить ее применение в указанной обстановке			
Испытание на помехоустойчивость	Испытательный уровень по МЭК 60601	Уровень соответствия	Электромагнитная обстановка - указания
Электростатические разряды (ЭСР) по МЭК 61000-4-2	± 6 кВ – контактный разряд	± 6 кВ – контактный разряд	Полы должны быть из дерева, бетона или керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна быть минимум 30%.
	± 8 кВ – воздушный разряд	± 8 кВ – воздушный разряд	
Наносекундные импульсные помехи по МЭК 61000-4-4	± 2 кВ для линий электропитания	± 2 кВ для линий электропитания	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больницы обстановки
	± 1 кВ для линий ввода/вывода	± 1 кВ для линий ввода/вывода	
Микросекундные импульсные помехи большой энергии по МЭК 61000-4-5	± 1 кВ – при подаче помех по схеме "провод-провод"	± 1 кВ – при подаче помех по схеме "провод-провод"	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больницы обстановки
	± 2 кВ – при подаче помех по схеме "провод-земля"	± 2 кВ – при подаче помех по схеме "провод-земля"	
Провалы, прерывания и изменения напряжения во входных линиях электропитания по МЭК 61000-4-11	$<5\% U_H$ (провал напряжения $>95\%$) в течение 0,5 периода	$<5\% U_m$ (провал напряжения $>95\%$) в течение 0,5 периода	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больницы обстановки. Если пользователю Комплекса требуется непрерывная работа в условиях прерываний сетевого напряжения, рекомендуется обеспечить питание Комплекса от батареи или источника бесперебойного питания
	$40\% U_H$ (провал напряжения 60%) в течение пяти периодов	$40\% U_m$ (провал напряжения 60%) в течение пяти периодов	
	$70\% U_H$ (провал напряжения 30%) в течение 25 периодов	$70\% U_m$ (провал напряжения 30%) в течение 25 периодов	
	$<5\% U_H$ (провал напряжения $>95\%$) в течение 5 с)	$<5\% U_m$ (провал напряжения $>95\%$) в течение 5 с)	
Магнитное поле промышленной частоты по МЭК 61000-4-8	3 А/м	3 А/м	Уровни магнитного поля промышленной частоты должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больницы обстановки
Примечание: U_H — напряжение сети переменного тока до применения испытательного уровня.			

86567070.941149.001-01

Лист

135

Таблица Б.3

Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость			
Комплекс предназначен для использования в электромагнитной окружающей среде, определённой ниже. Пользователь должен убедиться, что Комплекс используется в такой окружающей среде			
Испытание на помехоустойчивость	Испытательный уровень по МЭК 60601	Уровень соответствия	Электромагнитная обстановка - указания
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по МЭК 61000-4-6	3 В (среднеквадратичное значение) от 150 кГц до 80 МГц вне диапазона частот для ПНМ ВЧ устройств ^{а)}	3 В	Расстояние между используемым портативным/мобильным средством радиосвязи и любой частью Комплекса, включая кабели, должно быть не меньше рекомендуемого пространственного разнеса, который рассчитывается в соответствии с приведенным выражением применительно к частоте передатчика. Рекомендуемый пространственный разнос составляет: $d=1,2 \cdot \sqrt{P}$
Радиочастотное электромагнитное поле по МЭК IEC 61000-4-3	3 В/м от 80 МГц до 2,5 ГГц	3 В/м	$d=1,2 \cdot \sqrt{P}$ (от 80 МГц до 800 МГц) $d=2,3 \cdot \sqrt{P}$ (800 МГц до 2,5 ГГц) где d – рекомендуемый пространственный разнос, м^{б)}; P - номинальное значение максимальной выходной мощности в Вт в соответствии со значением, установленным изготовителем. Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков по результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой^{а)} должна быть ниже уровня соответствия в каждой полосе частот^{б)}. Помехи могут иметь место вблизи оборудования,  маркированного знаком

86567070.941149.001-01

Лист

136

а) Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных) и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, АМ и FM радиовещательных передатчиков, телевизионных передатчиков, не может быть определена расчетным путем с достаточной точностью. Для этого должны быть осуществлены практические измерения напряженности поля. Если измеренные значения в месте размещения Комплекса выше применимых уровней соответствия, то следует проводить наблюдения за работой Комплекса с целью проверки ее нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется отклонение от нормального функционирования, то необходимо принять дополнительные меры, такие как переориентировка или перемещение Комплекса.

б) Вне полосы частот от 150 кГц до 80 МГц следует обеспечить напряженность поля менее 3 В/м.

Примечания

1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля.
2. Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.

Таблица Б.4

Рекомендуемые значения пространственного разнеса между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи и Комплексом			
Комплекс предназначается для применения в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь Комплекса может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечивая минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и Комплексом, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи			
Номинальная максимальная выходная мощность передатчика, Вт	Пространственный разнос, м, в зависимости от частоты передатчика		
	$d=1,2\cdot\sqrt{P}$ в полосе от 150 кГц до 80 МГц	$d=1,2\cdot\sqrt{P}$ в полосе от 80 до 800 МГц	$d=2,3\cdot\sqrt{P}$ в полосе от 800 МГц до 2,5 ГГц
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
Примечания 1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля. 2. При определении рекомендуемых значений пространственного разнеса для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную максимальную выходную мощность в ваттах, указанную в документации изготовителя передатчика. 3. Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.			

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

138/сод. *Григорьев Василий* листа (ов)
Генеральный директор

Махотин

Махотин М.А./

