

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Системы коронарного стента Synergy XD, Synergy Megatron с лекарственным покрытием, варианты исполнения

производства

Boston Scientific Corporation / «Бостон Сэнтифик Корпорейшн»

2023

Boston
Scientific

SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

**4.00mm
x8mm**

Contents (1)



5.75mm

Maximum Sheath Inner Diameter

0.014in (0.36mm)

Recommended Guidewire

0.054in (1.42mm)

Recommended Guide Catheter

Store at 20°C (77°F)
expirations permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



GTIN

08714729981107

REF

H7493941808400

LOT

32967270



2025-11-27

Model	Length (mm)
0-010	3.00
0-010	3.00
10-1014	3.00
12-1210	4.12
10-1017	4.10
14-1430	4.32
15-1517	4.27
17-1724	4.38
18-1827	4.04
19-1934	4.52
20-2037	4.52



52051642-060

2023-11-28



Boston Scientific

SYNERGY™ XD

4.00mm x 8mm

REF H7493941808400

2025-11-27

LOT 32967270

GTIN 08714729981107

(01)08714729981107

(17)251127(10)32967270

(01)08714729981107

(17)251127(10)32967270

2025-11-27

LOT 32967270

GTIN 08714729981107

REF H7493941808400

2025-11-27

LOT 32967270

GTIN 08714729981107

REF H7493941808400

2025-11-27

LOT 32967270

GTIN 08714729981107

REF H7493941808400

2025-11-27

LOT 32967270

GTIN 08714729981107

REF H7493941808400

2025-11-27

LOT 32967270

GTIN 08714729981107

REF H7493941808400

2025-11-27

LOT 32967270

GTIN 08714729981107

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.boston-scientific.com/patents>

Made in IRELAND
Ballybrink Business Park
Galway, IRELAND

boston-scientific.com/SymbolLibrary

Rx ONLY



EC REP

Boston Scientific Limited

Ballybrink Business Park

Galway, IRELAND

CH REP

Boston Scientific AG

Kilbuckstrasse 8

4100 Solothurn

Switzerland

UK RP

Boston Scientific Limited

100 New Bridge Street

London, EC2E 8EA

England, United Kingdom

Boston Scientific Corporation


300 Boston Scientific Way

Marlborough, MA 01752 USA


USA Customer Service: +1 888 212 1091

boston-scientific.com

Картонная коробка Системы коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием, длина стента 8 мм, диаметр стента 4,00 мм; вид сзади.

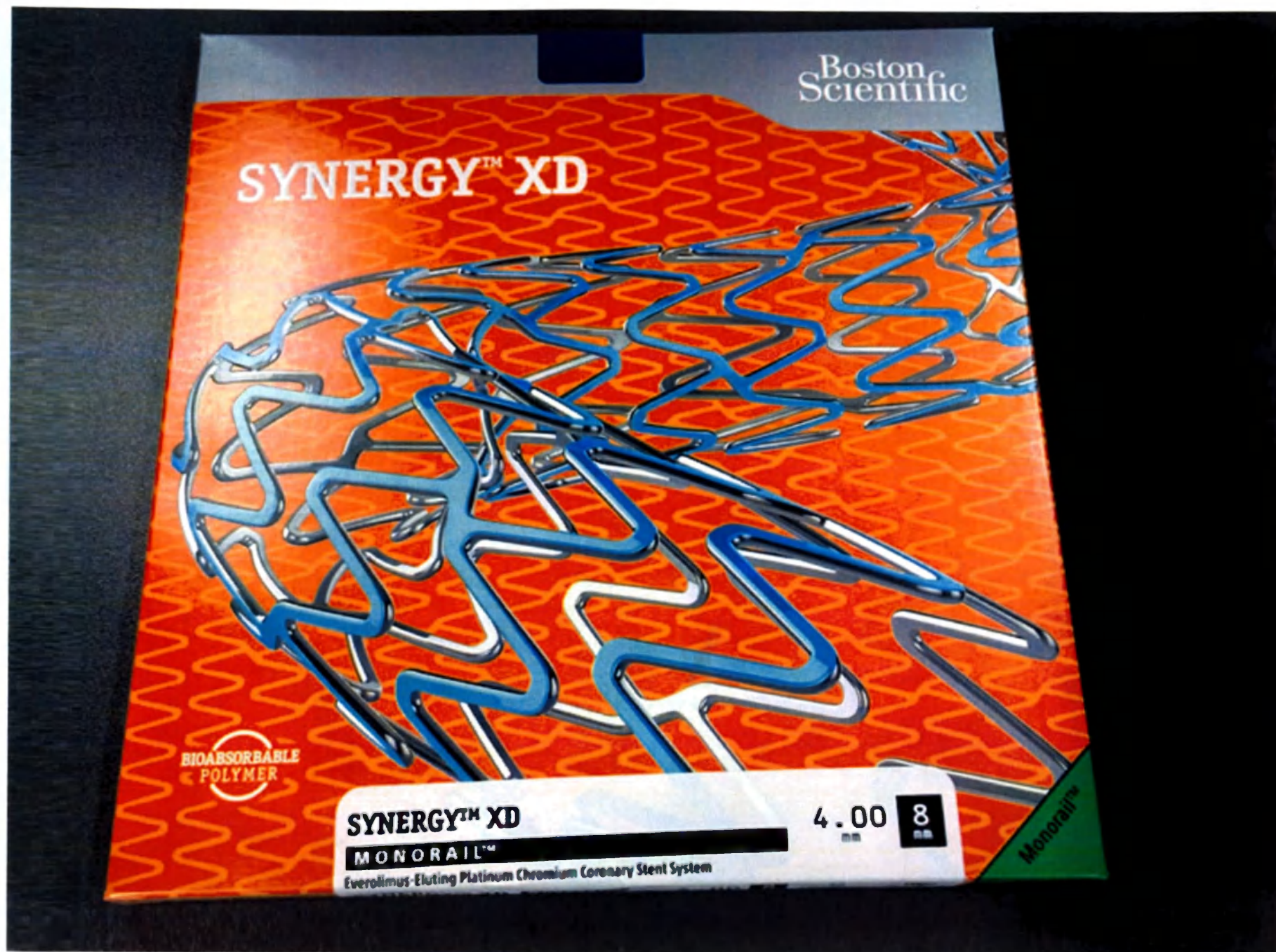

Картонная коробка Системы коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием, длина стента 8 мм, диаметр стента 4,00 мм; вид спереди.

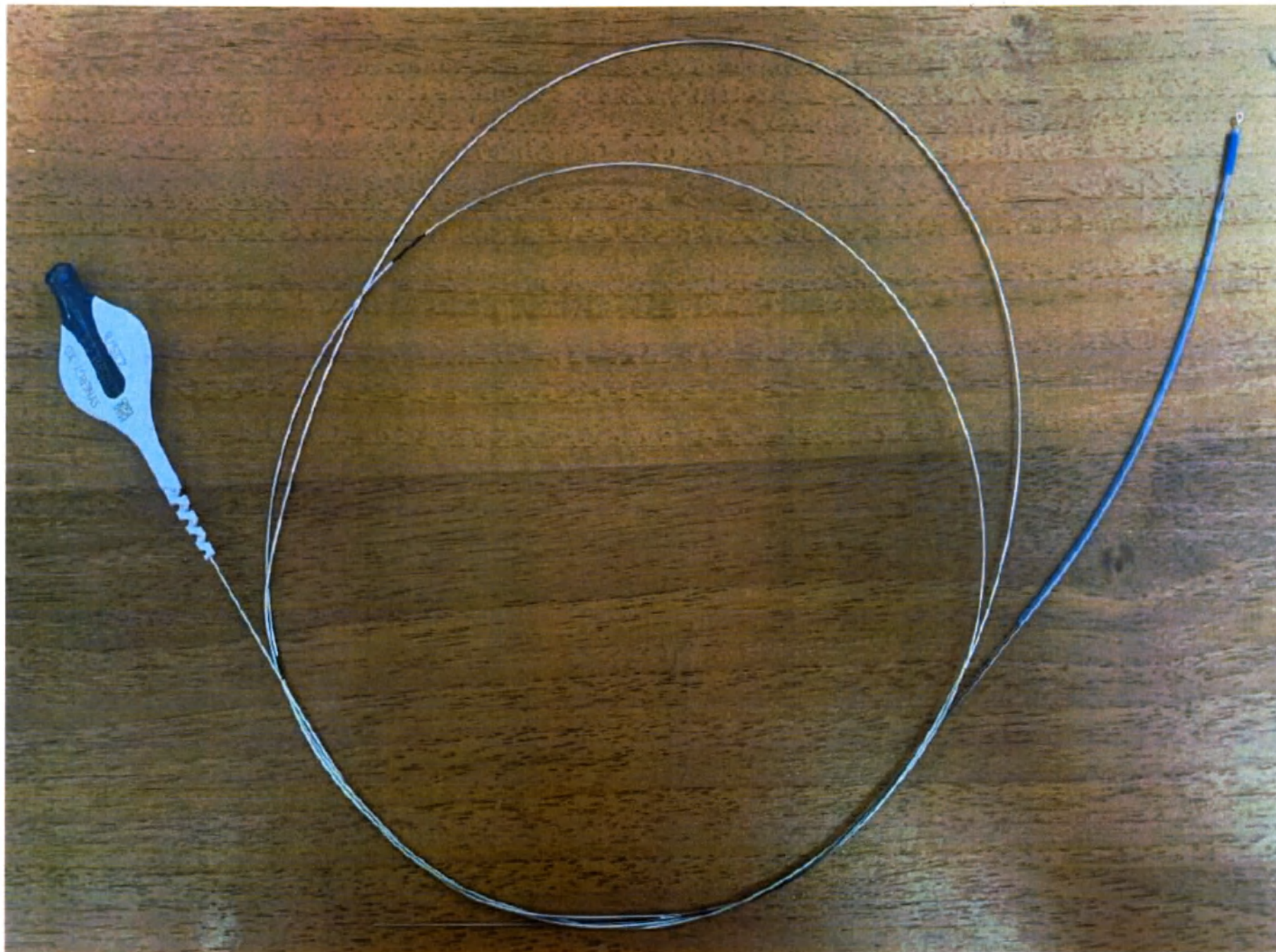

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием



Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием в защитной трубке-держателе

Boston
Scientific

SYNERGY
MEGATRON™



BIODEGRADABLE
POLYMER

SYNERGY **MEGATRON™**


MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System


3.50 12

Monorail™

Картонная коробка Системы коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 12 мм, диаметр стента 3,50 мм; вид спереди

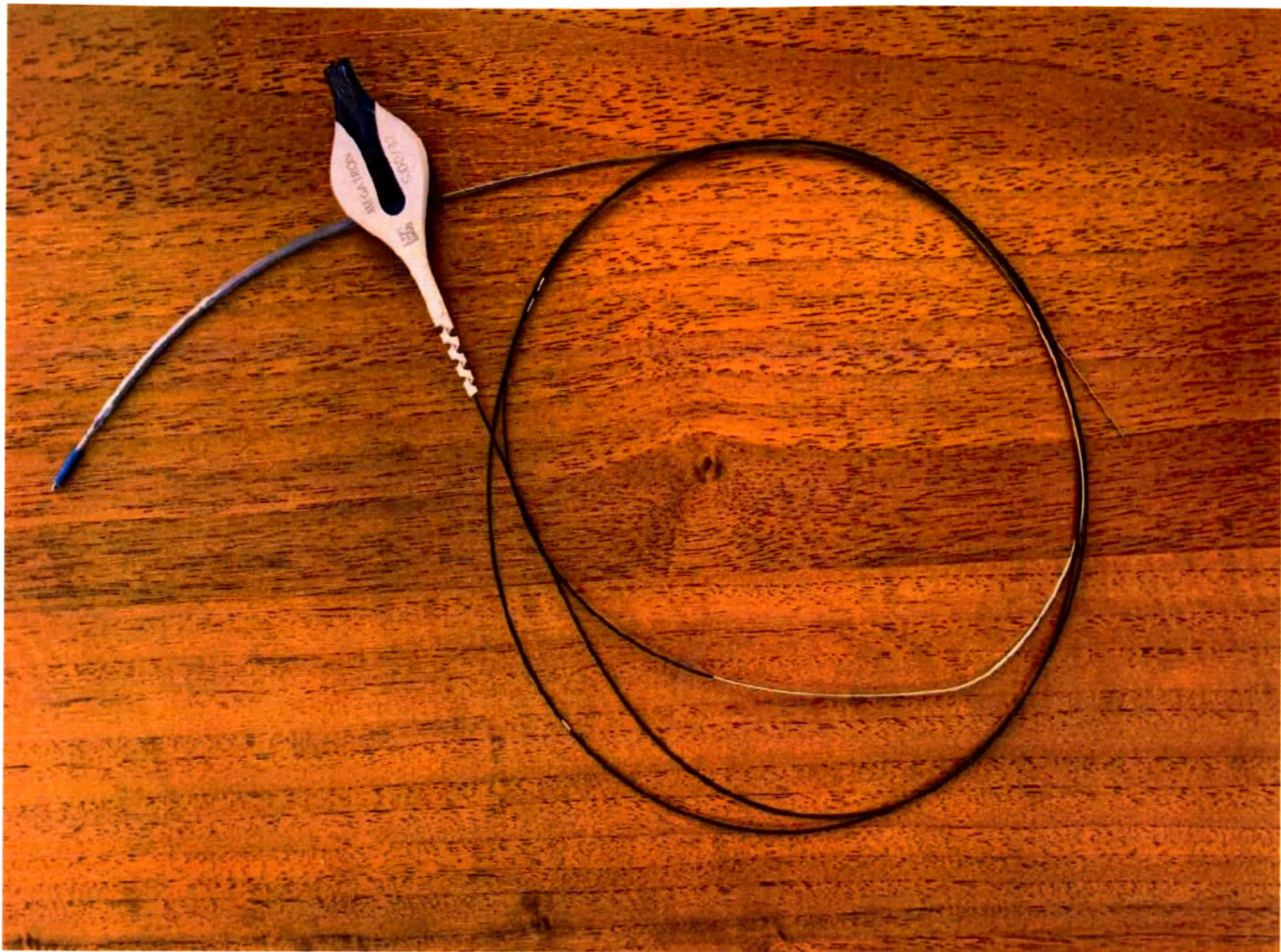

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием

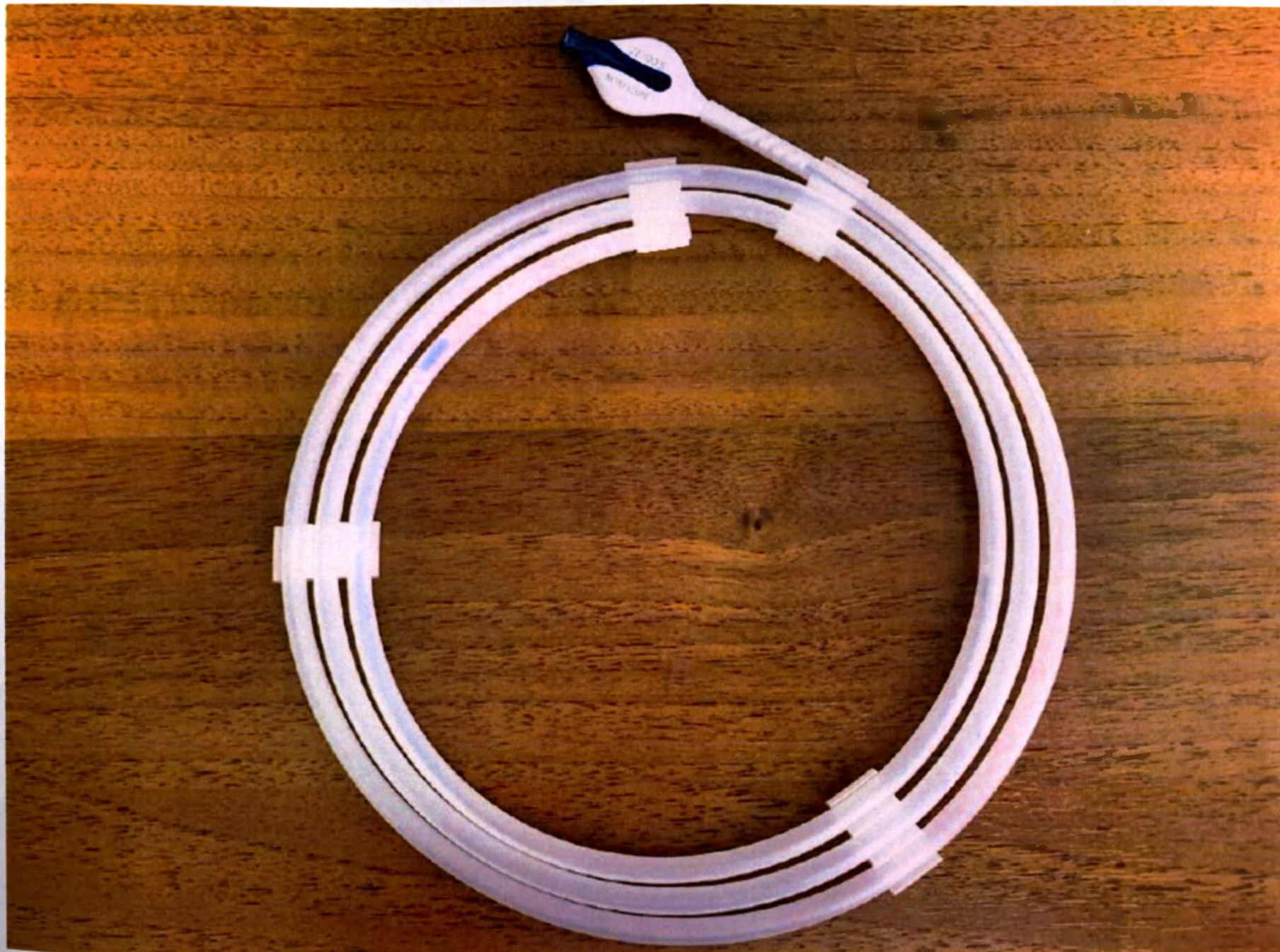

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием в защитной трубке-держателе

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
9 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.



Макеты маркировки картонной коробки медицинского изделия

Системы коронарного стента Synergy XD, Synergy Megatron с лекарственным
покрытием, варианты исполнения

2023

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.25mm
x8mm

Contents (1)

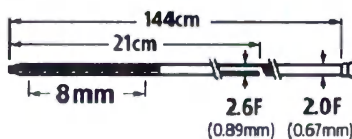

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

6FR ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guide wire

6FR ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C - 15°C 25°C R Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	2.25mm Stent I.D.
8 - 814	--
9 - 910	2.13
10 - 1014	2.19
11 - 1117	NOMINAL 2.24
12 - 1213	2.28
13 - 1317	2.31
14 - 1420	2.35
15 - 1517	2.37
16 - 1620	2.40
17 - 1724	2.43
18 - 1827	RATED* 2.45
19 - 1924	2.48
20 - 2027	2.51

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294155-01

2000-09-29

STERILE EO



Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

2.25mm x 8mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

2.25mm x 8mm

REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

2.25mm x 8mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can
be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.50mm
x8mm

Contents (1)

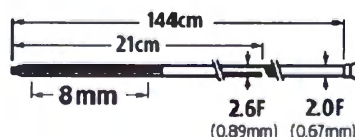

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	2.50mm Stent I.D.
8 - 814	2.35
9 - 910	2.42
10 - 1014	2.48
11 - 1117	NOMINAL 2.54
12 - 1213	2.59
13 - 1317	2.63
14 - 1420	2.67
15 - 1517	2.70
16 - 1620	2.73
17 - 1724	2.76
18 - 1827	RATED* 2.79
19 - 1924	2.82
20 - 2027	2.85

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bes.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

2.25mm x 8mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

2.25mm x 8mm

REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

2.25mm x 8mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

UDI

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.75mm
x 8mm

Contents (1)

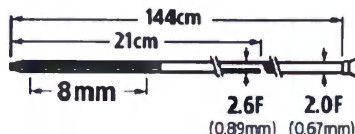

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GM ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	2.75mm Stent I.D.
8 - 814	2.57
9 - 910	2.65
10 - 1014	2.72
11 - 1117	NOMINAL 2.79
12 - 1213	2.85
13 - 1317	2.89
14 - 1420	2.93
15 - 1517	2.96
16 - 1620	3.00
17 - 1724	3.03
18 - 1827	RATED* 3.06
19 - 1924	3.10
20 - 2027	3.13

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE EO



IFU-bos.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

2.75mm x 8mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01) 08714729980056

(17) 000930(10) 12345678

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

2.75mm x 8mm

REF H74900000000000

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

2.75mm x 8mm

REF H74900000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01) 08714729980056

(17) 000930(10) 12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



UDI

(01) 08714729980056(17) 000930(10) 12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.00mm
x8mm

Contents (1)

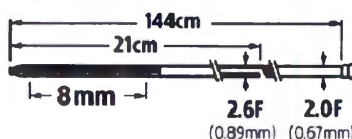

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

30°C 25°C 15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.00mm Stent I.D.
8 - 814	2.89
9 - 910	2.96
10 - 1014	3.02
11 - 1117	NOMINAL 3.08
12 - 1213	3.13
13 - 1317	3.17
14 - 1420	3.20
15 - 1517	3.24
15 - 1620	RATED* 3.27
17 - 1724	3.32
18 - 1827	3.37
19 - 1924	3.43
20 - 2027	3.49

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE EO



IFU-bsd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.00mm x 8mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.00mm x 8mm

REF H7490000000000

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.00mm x 8mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.50mm
x 8mm

Contents (1)

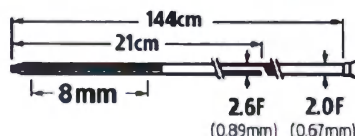

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

30°C - 15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm	kPa	3.50mm Stent I.D.
8 - 814		3.30
9 - 910		3.40
10 - 1014		3.48
11 - 1117	NOMINAL	3.55
12 - 1213		3.61
13 - 1317		3.66
14 - 1420		3.70
15 - 1517		3.74
16 - 1620	RATED*	3.79
17 - 1724		3.83
18 - 1827		3.87
19 - 1924		3.93
20 - 2027		3.99

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01

92672283-01A



2000-09-29

STERILE EO



Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.50mm x 8mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.50mm x 8mm

REF H7490000000000

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.50mm x 8mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

4.00mm
x 8mm

Contents (1)

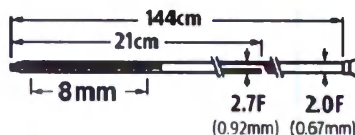

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

30°C 25°C 15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH

Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm · kPa Pressure	4.00mm Stent I.D.
8 - 914	3.81
9 - 910	3.91
10 - 1014	3.98
11 - 1117	NOMINAL 4.06
12 - 1213	4.12
13 - 1317	4.17
14 - 1420	4.22
15 - 1517	4.28
16 - 1620	RATED* 4.30
17 - 1724	4.36
18 - 1827	4.42
19 - 1924	4.52
20 - 2027	--

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE



IFU-bcsd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.00mm x 8mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.00mm x 8mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.00mm x 8mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.25mm
x12mm

Contents (1)

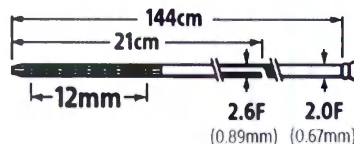

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

30°C - 15°C 25°C Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	2.25mm Stent I.D.
8 - 814	--
9 - 910	2.13
10 - 1014	2.19
11 - 1117	NOMINAL 2.24
12 - 1213	2.28
13 - 1317	2.31
14 - 1420	2.35
15 - 1517	2.37
16 - 1620	2.40
17 - 1724	2.43
18 - 1827	RATED* 2.45
19 - 1924	2.48
20 - 2027	2.51

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bed.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 12mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 12mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 12mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can
be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

 ООО ЦПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.75mm
x12mm

Contents (1)

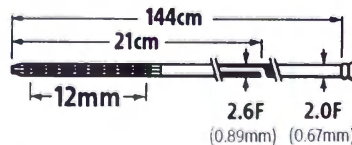

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

30°C 25°C 15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm	kPa	2.75mm Stent ID
8 - 814		2.57
9 - 910		2.65
10 - 1014		2.72
11 - 1117	NOMINAL	2.79
12 - 1213		2.85
13 - 1317		2.89
14 - 1420		2.93
15 - 1517		2.96
16 - 1620		3.00
17 - 1724		3.03
18 - 1827	RATED*	3.06
19 - 1924		3.10
20 - 2027		3.13

*Rated Burst Pressure DO NOT EXCEED

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE



IFU-bsd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 12mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 12mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 12mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.00mm
x12mm

Contents (1)

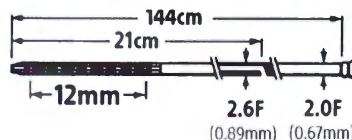

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C 25°C 15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.00mm Stent I.D.
8 - 894	2.89
9 - 910	2.96
10 - 1014	3.02
11 - 1117	NOMINAL 3.08
12 - 1213	3.13
13 - 1317	3.17
14 - 1420	3.20
15 - 1517	3.24
16 - 1620	RATED* 3.27
17 - 1724	3.32
18 - 1827	3.37
19 - 1924	3.43
20 - 2027	3.49

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE EO



IFU-bos.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.00mm x 12mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.00mm x 12mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.00mm x 12mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can
be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.50mm
x12mm

Contents (1)

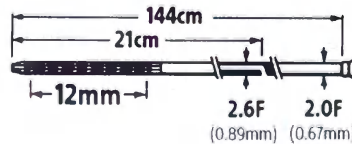

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C Store at 25°C (77°F);
15°C excursions permitted to
30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.50mm Stent I.D.
8 - 814	3.30
9 - 910	3.40
10 - 1014	3.48
11 - 1117	NOMINAL 3.55
12 - 1213	3.61
13 - 1317	3.66
14 - 1420	3.70
15 - 1517	3.74
16 - 1620	RATED* 3.79
17 - 1724	3.83
18 - 1827	3.87
19 - 1924	3.93
20 - 2027	3.99

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.



2000-09-29

STERILE



Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 12mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 12mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 12mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

UDI

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

4.00mm
x 12mm

Contents (1)

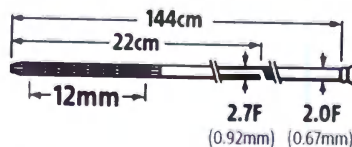

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GA 0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GA 0.056in (1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C 25°C 15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	4.00mm Stent I.D.
8 - 814	3.81
9 - 910	3.91
10 - 1014	3.98
11 - 1117	NOMINAL 4.06
12 - 1219	4.12
13 - 1317	4.17
14 - 1420	4.22
15 - 1517	4.26
16 - 1620	RATED* 4.30
17 - 1724	4.36
18 - 1827	4.42
19 - 1924	4.52
20 - 2027	---

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bcs.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

4.00mm x 12mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

4.00mm x 12mm

REF H7490000000000

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

4.00mm x 12mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can
be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

4.50mm
x12mm

Contents (1)

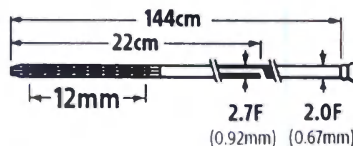

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GR ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C 25°C Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.50mm Stent I.D.
8 - 814	4.11
9 - 910	4.24
10 - 1014	4.35
11 - 1117	NOMINAL 4.46
12 - 1213	4.54
13 - 1317	4.61
14 - 1420	4.68
15 - 1517	4.73
16 - 1620	RATED* 4.78
17 - 1724	4.83
18 - 1827	4.89
19 - 1924	4.96
20 - 2027	5.04

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

4.50mm x 12mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056

(17)000930(10)12345678

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

4.50mm x 12mm

REF H74900000000000

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

4.50mm x 12mm

REF H74900000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056

(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

5.00mm
x12mm

Contents (1)

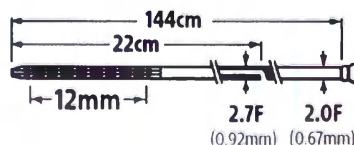

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter



30°C 25°C Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	5.00mm Stent I.D.
8 - 814	4.62
9 - 910	4.73
10 - 1014	4.85
11 - 1117	NOMINAL 4.95
12 - 1213	5.03
13 - 1317	5.11
14 - 1420	5.17
15 - 1517	5.22
16 - 1620	RATED* 5.28
17 - 1724	5.34
18 - 1827	5.39
19 - 1924	5.45
20 - 2027	5.50

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE EO



IFU-bes.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
5.00mm x 12mm

REF H7490000000000

EXP 2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
5.00mm x 12mm

REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
5.00mm x 12mm

REF H7490000000000

EXP 2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

EXP 2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>


Boston
Scientific

SYNERGY™ XD **MONORAIL™**

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.25mm
x16mm

 Contents (1)

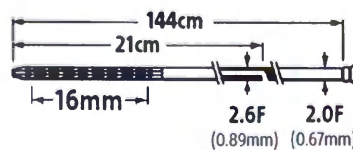

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

 **≤0.014in (0.36mm)**
Recommended Guidewire

 **≥5F (0.056in/1.42mm)**
Recommended Guide Catheter

30°C  25°C  15°C  Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to 15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	2.25mm Stent I.D.
8 - 874	..
9 - 910	2.13
10 - 1014	2.19
11 - 1117	NOMINAL 2.24
12 - 1213	2.28
13 - 1317	2.31
14 - 1420	2.35
15 - 1517	2.37
16 - 1620	2.40
17 - 1724	2.43
18 - 1827	RATED* 2.45
19 - 1924	2.48
20 - 2027	2.51

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01

 2000-09-29

STERILE



IFU-bos.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 16mm
REF H7490000000000
EXP 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 16mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 16mm
REF H7490000000000
EXP 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

EXP 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.50mm
x16mm

Contents (1)

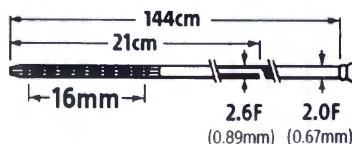

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	2.50mm Stent I.D.
8 - 814	2.35
9 - 910	2.42
10 - 1014	2.48
11 - 1117	NOMINAL 2.54
12 - 1213	2.59
13 - 1317	2.63
14 - 1420	2.67
15 - 1517	2.70
16 - 1620	2.73
17 - 1724	2.76
18 - 1827	RATED* 2.79
19 - 1924	2.82
20 - 2027	2.85

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30



2000-09-29

STERILE EO

IFU-bcd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 16mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000


(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 16mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 16mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

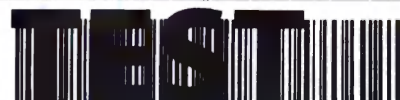

(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.75mm
x16mm

Contents (1)

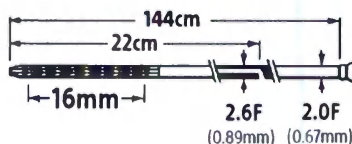

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GA s0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC z5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C - 15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	2.75mm Stent I.D.
8 - 814	2.57
9 - 910	2.65
10 - 1014	2.72
11 - 1117	NOMINAL 2.79
12 - 1213	2.85
13 - 1317	2.89
14 - 1420	2.93
15 - 1517	2.96
16 - 1620	3.00
17 - 1724	3.03
18 - 1827	RATED* 3.06
19 - 1924	3.10
20 - 2027	3.13

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE EO

IFU-bed.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 16mm
REF H7490000000000
EXP 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 16mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 16mm
REF H7490000000000
EXP 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

EXP 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>


Boston
Scientific

SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.00mm
x16mm

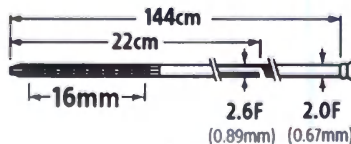

Contents (1)

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C - 15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm. kPa Pressure	3.00mm Stent I.D.
8 - 814	2.89
9 - 910	2.96
10 - 1014	3.02
11 - 1117	NOMINAL 3.08
12 - 1213	3.13
13 - 1317	3.17
14 - 1420	3.20
15 - 1517	3.24
16 - 1620	RATED* 3.27
17 - 1724	3.32
18 - 1827	3.37
19 - 1924	3.43
20 - 2027	3.49

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE



IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.00mm x 16mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.00mm x 16mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.00mm x 16mm
REF H7490000000000

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can
be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.50mm
x16mm

Contents (1)

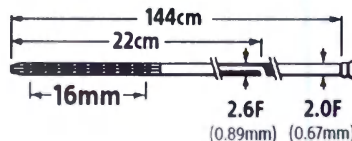

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.50mm Stent I.D.
8 - 814	3.30
9 - 910	3.40
10 - 1014	3.48
11 - 1117	NOMINAL 3.55
12 - 1213	3.61
13 - 1317	3.66
14 - 1428	3.70
15 - 1517	3.74
16 - 1620	RATED* 3.79
17 - 1724	3.83
18 - 1827	3.87
19 - 1924	3.93
20 - 2027	3.99

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bed.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 16mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 16mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 16mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

4.00mm
x16mm

Contents (1)

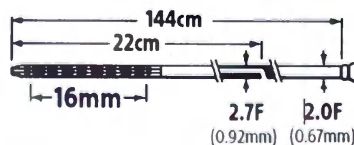

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.00mm Stent I.D.
8 - 814	3.81
9 - 910	3.91
10 - 1014	3.98
11 - 1117	NOMINAL 4.06
12 - 1213	4.12
13 - 1317	4.17
14 - 1420	4.22
15 - 1517	4.26
16 - 1620	RATED* 4.30
17 - 1724	4.36
18 - 1827	4.42
19 - 1924	4.52
20 - 2027	--

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE



IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.00mm x 16mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.00mm x 16mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.00mm x 16mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

**4.50mm
x16mm**

 Contents (1)

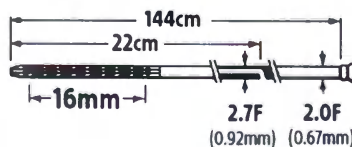

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

 **≤0.014in (0.36mm)**
Recommended Guidewire

 **≥6F (0.070in/1.78mm)**
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C  Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	4.50mm Stent I.D.
8 - 814	4.11
9 - 910	4.24
10 - 1014	4.35
11 - 1117	NOMINAL 4.46
12 - 1213	4.54
13 - 1317	4.61
14 - 1420	4.68
15 - 1517	4.73
16 - 1620	RATED* 4.78
17 - 1724	4.83
18 - 1827	4.89
19 - 1924	4.96
20 - 2027	5.04

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01

 2000-09-29

STERILE EO



IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.50mm x 16mm
 H7490000000000
 2000-09-30
 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.50mm x 16mm
 H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.50mm x 16mm
 H7490000000000
 2000-09-30
 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

 2000-09-30
 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

5.00mm
x16mm

Contents (1)

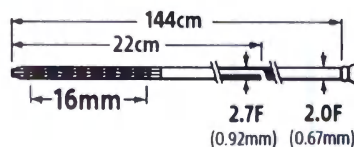

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter

30°C 25°C 15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	5.00mm Stent I.D.
8 - 814	4.62
9 - 910	4.73
10 - 1014	4.85
11 - 1117	NOMINAL 4.95
12 - 1213	5.03
13 - 1317	5.11
14 - 1420	5.17
15 - 1517	5.22
16 - 1620	RATED* 5.28
17 - 1724	5.34
18 - 1827	5.39
19 - 1924	5.45
20 - 2027	5.50

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE

IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
5.00mm x 16mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
5.00mm x 16mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
5.00mm x 16mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.25mm
x20mm

Contents (1)

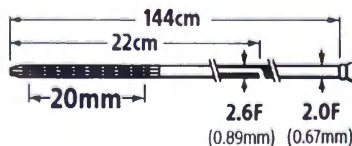

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GN ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

EC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	2.25mm Stent I.D.
8 - 814	..
9 - 910	2.13
10 - 1014	2.19
11 - 1117	NOMINAL 2.24
12 - 1213	2.28
13 - 1317	2.31
14 - 1420	2.35
15 - 1517	2.37
16 - 1620	2.40
17 - 1724	2.43
18 - 1827	RATED* 2.45
19 - 1924	2.48
20 - 2027	2.51

* Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE



IFU-bcsd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 20mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 20mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 20mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.50mm
x20mm

Contents (1)

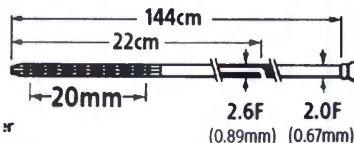

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	2.50mm Stent I.D.
8 - 814	2.35
9 - 910	2.42
10 - 1014	2.48
11 - 1117	NOMINAL 2.54
12 - 1213	2.59
13 - 1317	2.63
14 - 1420	2.67
15 - 1517	2.70
16 - 1620	2.73
17 - 1724	2.76
18 - 1827	RATED* 2.79
19 - 1924	2.82
20 - 2027	2.85

*Rated Burst Pressure DO NOT EXCEED

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE



IFU-bcsd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 20mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01) 08714729980056
(17) 000930(10) 12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 20mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 20mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01) 08714729980056
(17) 000930(10) 12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01) 08714729980056 (17) 000930 (10) 12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.75mm
x20mm

Contents (1)

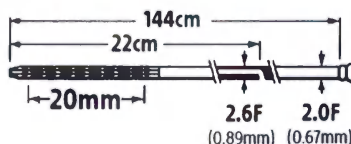

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GR ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

30°C 25°C 15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	2.75mm Stent I.D.
8 - 814	2.57
9 - 910	2.65
10 - 1014	2.72
11 - 1117	NOMINAL 2.79
12 - 1213	2.85
13 - 1317	2.89
14 - 1420	2.93
15 - 1517	2.96
16 - 1620	3.00
17 - 1724	3.03
18 - 1827	RATED* 3.06
19 - 1924	3.10
20 - 2027	3.13

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bos.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 20mm
REF H7490000000000
EXP 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 20mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 20mm
REF H7490000000000
EXP 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

EXP 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.00mm
x20mm

Contents (1)

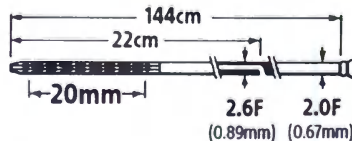

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

6FR ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

6FR ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C 25°C R Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.00mm Stent I.D.
8 - 814	2.89
9 - 910	2.96
10 - 1014	3.02
11 - 1117	NOMINAL 3.08
12 - 1213	3.13
13 - 1317	3.17
14 - 1420	3.20
15 - 1517	3.24
16 - 1620	RATED* 3.27
17 - 1724	3.32
18 - 1827	3.37
19 - 1924	3.43
20 - 2027	3.49

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE EO

IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.00mm x 20mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.00mm x 20mm

REF H74900000000000

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.00mm x 20mm

REF H74900000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.50mm
x20mm

Contents (1)

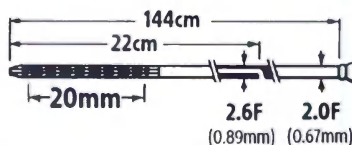

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

GM ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

30°C 25°C 15°C Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to 15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.50mm Stent I.D.
8 - 814	3.30
9 - 910	3.40
10 - 1014	3.48
11 - 1117	NOMINAL 3.55
12 - 1213	3.61
13 - 1317	3.66
14 - 1420	3.70
15 - 1517	3.74
16 - 1620	RATED* 3.79
17 - 1724	3.83
18 - 1827	3.87
19 - 1924	3.93
20 - 2027	3.99

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE EO



IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.50mm x 20mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.50mm x 20mm

REF H74900000000000

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.50mm x 20mm

REF H74900000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

4.00mm
x20mm

Contents (1)

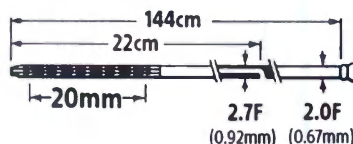

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.00mm Stent I.D.
8 - 814	3.81
9 - 918	3.91
10 - 1014	3.98
11 - 1117	NOMINAL 4.06
12 - 1213	4.12
13 - 1317	4.17
14 - 1420	4.22
15 - 1517	4.26
16 - 1620	RATED* 4.30
17 - 1724	4.36
18 - 1827	4.42
19 - 1924	4.52
20 - 2027	---

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



2000-09-29

STERILE



Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.00mm x 20mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.00mm x 20mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.00mm x 20mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

**4.50mm
x20mm**

 Contents (1)

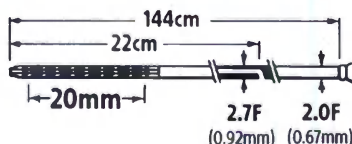

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C  25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.50mm Stent I.D.
8 - 814	4.11
9 - 910	4.34
10 - 1014	4.35
11 - 1117	NOMINAL 4.46
12 - 1213	4.54
13 - 1317	4.61
14 - 1420	4.68
15 - 1517	4.73
16 - 1620	RATED* 4.78
17 - 1724	4.83
18 - 1827	4.89
19 - 1924	4.96
20 - 2027	5.04

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01

 2000-09-29

STERILE EO



IFU-bcsd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.50mm x 20mm

REF H7490000000000

M 2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.50mm x 20mm

REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.50mm x 20mm

REF H7490000000000

M 2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

M 2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

UOM

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

5.00mm
x20mm

Contents (1)

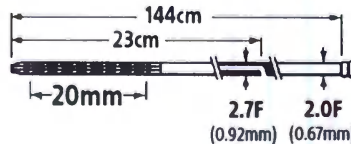

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
25°C
15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	5.00mm Stent I.D.
8 - 814	4.62
9 - 910	4.73
10 - 1014	4.85
11 - 1117	NOMINAL 4.95
12 - 1213	5.03
13 - 1317	5.11
14 - 1420	5.17
15 - 1517	5.22
16 - 1620	RATED* 5.28
17 - 1724	5.34
18 - 1827	5.39
19 - 1924	5.45
20 - 2027	5.50

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE



IFU-bcsd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
5.00mm x 20mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
5.00mm x 20mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
5.00mm x 20mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.25mm
x 24mm

Contents (1)

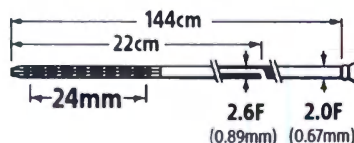

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GM ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	2.25mm Stent I.D.
8 - 874	--
9 - 910	2.13
10 - 1014	2.19
11 - 1117	NOMINAL 2.24
12 - 1213	2.28
13 - 1317	2.31
14 - 1420	2.35
15 - 1517	2.37
16 - 1620	2.40
17 - 1724	2.43
18 - 1827	RATED* 2.45
19 - 1924	2.48
20 - 2027	2.51

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE



IRU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 24mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.50mm
x 24mm

Contents (1)

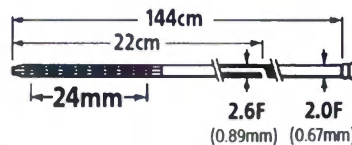

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
25°C
15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	2.50mm Stent I.D.
8 - 814	2.35
9 - 910	2.42
10 - 1014	2.48
11 - 1117	NOMINAL 2.54
12 - 1213	2.59
13 - 1317	2.63
14 - 1420	2.67
15 - 1517	2.70
16 - 1620	2.73
17 - 1724	2.76
18 - 1827	RATED* 2.79
19 - 1924	2.82
20 - 2027	2.85

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30



2000-09-29

STERILE



Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 24mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 24mm

REF H74900000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 24mm

REF H74900000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

UDI

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.75mm
x24mm

Contents (1)

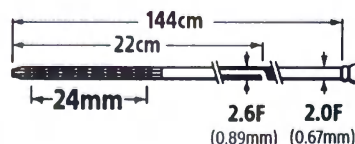

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	2.75mm Stent I.D.
8 - 894	2.57
9 - 910	2.65
10 - 1014	2.72
11 - 1117	NOMINAL 2.79
12 - 1213	2.85
13 - 1317	2.89
14 - 1420	2.93
15 - 1517	2.96
16 - 1620	3.00
17 - 1724	3.03
18 - 1827	RATED* 3.06
19 - 1924	3.10
20 - 2027	3.13

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



2000-09-29

STERILE



Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 24mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.00mm
x24mm

Contents (1)

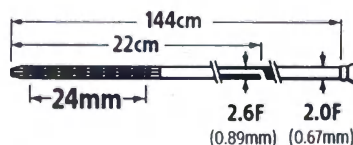

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

GN ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C 25°C Store at 25°C (77°F);
15°C excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	3.00mm Stent I.D.
8 - 814	2.89
9 - 910	2.96
10 - 1014	3.02
11 - 1117	NOMINAL 3.08
12 - 1213	3.13
13 - 1317	3.17
14 - 1420	3.20
15 - 1517	3.24
16 - 1620	RATED* 3.27
17 - 1724	3.32
18 - 1827	3.37
19 - 1924	3.43
20 - 2027	3.49

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE



IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.00mm x 24mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.00mm x 24mm

REF H74900000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.00mm x 24mm

REF H74900000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can
be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.50mm
x24mm

Contents (1)

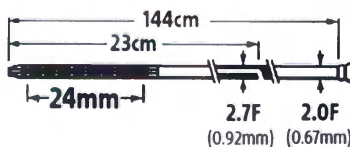

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.50mm Stent I.D.
8 - 814	3.30
9 - 918	3.40
10 - 1014	3.48
11 - 1117	NOMINAL 3.55
12 - 1219	3.61
13 - 1317	3.66
14 - 1420	3.70
15 - 1517	3.74
16 - 1620	RATED* 3.79
17 - 1724	3.83
18 - 1827	3.87
19 - 1924	3.93
20 - 2027	3.99

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code
51294156-01

2000-09-29

STERILE EO

IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 24mm
REF H7490000000000

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

4.00mm
x24mm

Contents (1)

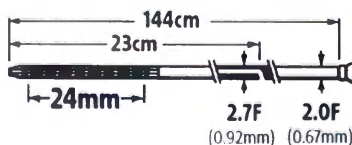

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm	kPa	4.00mm Stent ID
8 - 814		3.81
9 - 910		3.91
10 - 1014		3.98
11 - 1117	NOMINAL	4.06
12 - 1213		4.12
13 - 1317		4.17
14 - 1420		4.22
15 - 1517		4.26
16 - 1620	RATED*	4.30
17 - 1724		4.36
18 - 1827		4.42
19 - 1924		4.52
20 - 2027		--

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bsd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

4.00mm x 24mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

4.00mm x 24mm

REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

4.00mm x 24mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

4.50mm
x24mm

Contents (1)

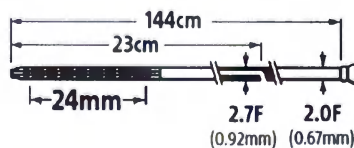

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
25°C
15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H749 0000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.50mm Stent I.D.
8 - 814	4.11
9 - 910	4.24
10 - 1014	4.35
11 - 1117	NOMINAL 4.46
12 - 1213	4.54
13 - 1317	4.61
14 - 1420	4.68
15 - 1517	4.73
16 - 1620	RATED* 4.78
17 - 1724	4.83
18 - 1827	4.89
19 - 1924	4.96
20 - 2027	5.04

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bosd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.50mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.50mm x 24mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.50mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

5.00mm
x 24mm

Contents (1)

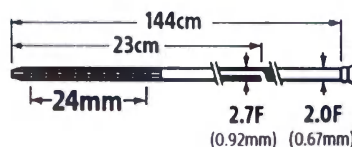

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	5.00mm Stent I.D.
8 - 814	4.62
9 - 910	4.73
10 - 1014	4.85
11 - 1117	NOMINAL 4.95
12 - 1213	5.03
13 - 1317	5.11
14 - 1420	5.17
15 - 1517	5.22
16 - 1620	RATED* 5.28
17 - 1724	5.34
18 - 1827	5.39
19 - 1924	5.45
20 - 2027	5.50

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H749 0000000000

LOT

12345678



2000-09-30



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bcsd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
5.00mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
5.00mm x 24mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
5.00mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.25mm
x28mm

Contents (1)

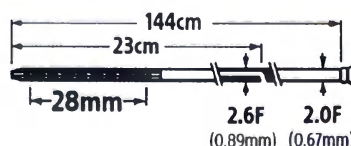

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	2.25mm Stent I.D.
8 - 814	--
9 - 910	2.13
10 - 1014	2.19
11 - 1117	NOMINAL 2.24
12 - 1213	2.28
13 - 1317	2.31
14 - 1420	2.35
15 - 1517	2.37
16 - 1620	2.40
17 - 1724	2.43
18 - 1827	RATED* 2.45
19 - 1924	2.48
20 - 2027	2.51

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H749 0000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 28mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 28mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 28mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056 (17)000930 (10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.50mm
x28mm

Contents (1)

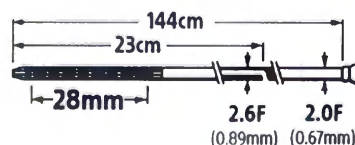

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm	kPa	2.50mm Stent I.D.
8 - 814		2.35
9 - 910		2.42
10 - 1014		2.48
11 - 1117	NOMINAL	2.54
12 - 1219		2.59
13 - 1317		2.63
14 - 1420		2.67
15 - 1517		2.70
16 - 1620		2.73
17 - 1724		2.76
18 - 1827	RATED*	2.79
19 - 1924		2.82
20 - 2027		2.85

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 28mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 28mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 28mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.75mm
x28mm

Contents (1)

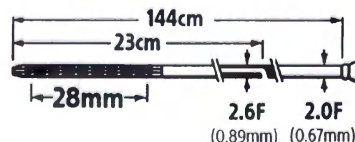

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	2.75mm Stent I.D.
8 - 814	2.57
9 - 910	2.65
10 - 1014	2.72
11 - 1117	NOMINAL 2.79
12 - 1213	2.85
13 - 1317	2.89
14 - 1420	2.93
15 - 1517	2.96
16 - 1620	3.00
17 - 1724	3.03
18 - 1827	RATED* 3.06
19 - 1924	3.10
20 - 2027	3.13

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bsd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 28mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01) 08714729980056
(17) 000930 (10) 12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 28mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 28mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01) 08714729980056
(17) 000930 (10) 12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01) 08714729980056 (17) 000930 (10) 12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.00mm
x28mm

Contents (1)

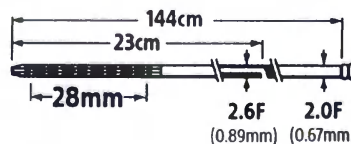

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C 25°C 15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H749 0000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.00mm Stent I.D.
8 - 814	2.89
9 - 910	2.96
10 - 1014	3.02
11 - 1117	NOMINAL 3.08
12 - 1213	3.13
13 - 1317	3.17
14 - 1420	3.20
15 - 1517	3.24
16 - 1620	RATED* 3.27
17 - 1724	3.32
18 - 1827	3.37
19 - 1924	3.43
20 - 2027	3.49

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.



2000-09-29

STERILE

IFU-bsci.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.00mm x 28mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.00mm x 28mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.00mm x 28mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.50mm
x28mm

Contents (1)

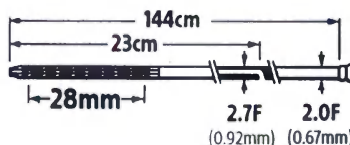

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

30°C 25°C 15°C Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.50mm Stent I.D.
8 - 814	3.30
9 - 910	3.40
10 - 1014	3.48
11 - 1117	NOMINAL 3.55
12 - 1219	3.61
13 - 1317	3.66
14 - 1430	3.70
15 - 1517	3.74
16 - 1620	RATED* 3.79
17 - 1724	3.83
18 - 1827	3.87
19 - 1924	3.93
20 - 2027	3.99

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE EO



IFU-bcd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 28mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 28mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 28mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

4.00mm
x28mm

Contents (1)

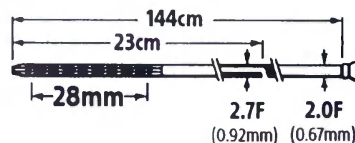

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	4.00mm Stent I.D.
8 - 814	3.81
9 - 910	3.91
10 - 1014	3.98
11 - 1117	NOMINAL 4.06
12 - 1213	4.12
13 - 1317	4.17
14 - 1420	4.22
15 - 1517	4.26
16 - 1620	RATED* 4.30
17 - 1724	4.36
18 - 1827	4.42
19 - 1924	4.52
20 - 2027	...

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bsc.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

4.00mm x 28mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

4.00mm x 28mm

REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

4.00mm x 28mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

4.50mm
x28mm

Contents (1)

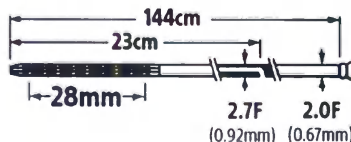

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter



30°C 15°C 25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H749 0000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm	kPa	4.50mm Stent I.D.
8 - 814		4.11
9 - 910		4.24
10 - 1014		4.35
11 - 1117	NOMINAL	4.46
12 - 1213		4.54
13 - 1317		4.61
14 - 1420		4.68
15 - 1517		4.73
16 - 1620	RATED*	4.78
17 - 1724		4.83
18 - 1827		4.89
19 - 1924		4.96
20 - 2027		5.04

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE



IFU-bsd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

4.50mm x 28mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01) 08714729980056
(17) 000930 (10) 12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

4.50mm x 28mm

REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

4.50mm x 28mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01) 08714729980056
(17) 000930 (10) 12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01) 08714729980056 (17) 000930 (10) 12345678

UDI

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

5.00mm
x 28mm

Contents (1)

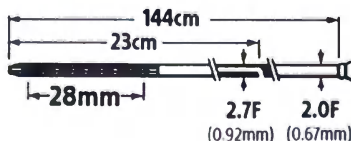

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	5.00mm Stent I.D.
8 - 814	4.62
9 - 910	4.73
10 - 1014	4.85
11 - 1117	NOMINAL 4.95
12 - 1213	5.03
13 - 1317	5.11
14 - 1420	5.17
15 - 1517	5.22
16 - 1620	RATED* 5.28
17 - 1724	5.34
18 - 1827	5.39
19 - 1924	5.45
20 - 2027	5.50

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bed.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
5.00mm x 28mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
5.00mm x 28mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
5.00mm x 28mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>


Boston
Scientific

SYNERGY™ XD MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.25mm
x 32mm

Contents (1)

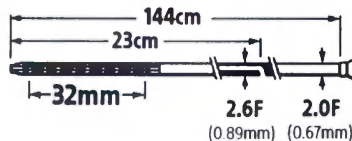

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GN ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	2.25mm Stent I.D.
8 - 814	-
9 - 910	2.13
10 - 9014	2.19
11 - 1117	NOMINAL 2.24
12 - 1213	2.28
13 - 1317	2.31
14 - 1420	2.35
15 - 1517	2.37
16 - 1620	2.40
17 - 1724	2.43
18 - 1827	RATED* 2.45
19 - 1924	2.48
20 - 2027	2.51

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.



2000-09-29

STERILE



Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 32mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01) 08714729980056
(17) 000930 (10) 12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 32mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 32mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01) 08714729980056
(17) 000930 (10) 12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01) 08714729980056 (17) 000930 (10) 12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.50mm
x32mm

Contents (1)

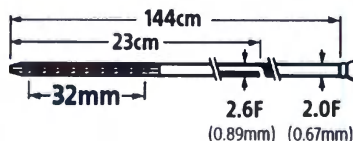

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

30°C 25°C Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	2.50mm Stent I.D.
8 - 814	2.35
9 - 910	2.42
10 - 1014	2.48
11 - 1117	NOMINAL 2.54
12 - 1213	2.59
13 - 1317	2.63
14 - 1420	2.67
15 - 1517	2.70
16 - 1620	2.73
17 - 1724	2.76
18 - 1827	RATED* 2.79
19 - 1924	2.82
20 - 2027	2.85

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bcsd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

2.50mm x 32mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

2.50mm x 32mm

REF H74900000000000

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

2.50mm x 32mm

REF H74900000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.75mm
x 32mm

Contents (1)

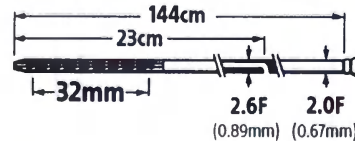

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

CM ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C 25°C R Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	2.75mm Stent I.D.
8 - 814	2.57
9 - 910	2.65
10 - 1014	2.72
11 - 1117	NOMINAL 2.79
12 - 1213	2.85
13 - 1317	2.89
14 - 1420	2.93
15 - 1517	2.96
16 - 1620	3.00
17 - 1724	3.03
18 - 1827	RATED* 3.06
19 - 1924	3.10
20 - 2027	3.13

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE



IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybri Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 32mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01) 08714729980056
(17) 000930 (10) 12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 32mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.75mm x 32mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01) 08714729980056
(17) 000930 (10) 12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01) 08714729980056 (17) 000930 (10) 12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.00mm
x 32mm

Contents (1)

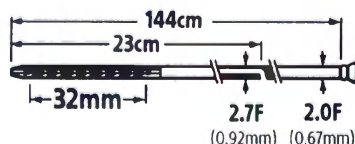

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

GN ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.00mm Stent I.D.
8 - 814	2.89
9 - 910	2.96
10 - 1014	3.02
11 - 1117	NOMINAL 3.08
12 - 1213	3.13
13 - 1317	3.17
14 - 1420	3.20
15 - 1517	3.24
16 - 1620	RATED* 3.27
17 - 1724	3.32
18 - 1827	3.37
19 - 1924	3.43
20 - 2027	3.49

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE



IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.00mm x 32mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.00mm x 32mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.00mm x 32mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.50mm
x 32mm

Contents (1)

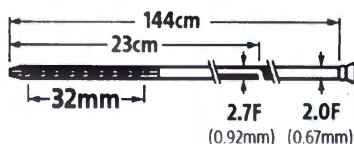

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C 25°C Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	3.50mm Stent I.D.
8 - 814	3.30
9 - 910	3.40
10 - 1014	3.48
11 - 1117	NOMINAL 3.55
12 - 1219	3.61
13 - 1317	3.66
14 - 1420	3.70
15 - 1517	3.74
16 - 1620	RATED* 3.79
17 - 1724	3.83
18 - 1827	3.87
19 - 1924	3.93
20 - 2027	3.99

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30



2000-09-29

STERILE

IFU-bsd.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 32mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 32mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 32mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

4.00mm
x 32mm

Contents (1)

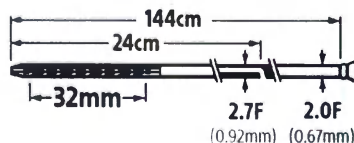

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	4.00mm Stent I.D.
8 - 814	3.81
9 - 910	3.91
10 - 1014	3.98
11 - 1117	NOMINAL 4.06
12 - 1213	4.12
13 - 1317	4.17
14 - 1420	4.22
15 - 1517	4.26
16 - 1620	RATED* 4.30
17 - 1724	4.36
18 - 1827	4.42
19 - 1924	4.52
20 - 2027	

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE



IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

4.00mm x 32mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

4.00mm x 32mm

REF H7490000000000

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

4.00mm x 32mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can
be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

4.50mm
x 32mm

Contents (1)

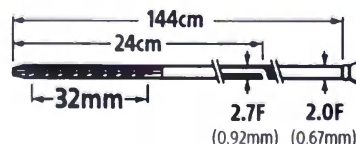

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	4.50mm Stent I.D.
8 - 814	4.11
9 - 910	4.24
10 - 1014	4.35
11 - 1117	NOMINAL 4.46
12 - 1213	4.54
13 - 1317	4.61
14 - 1420	4.68
15 - 1517	4.73
16 - 1620	RATED* 4.78
17 - 1724	4.83
18 - 1827	4.89
19 - 1924	4.96
20 - 2027	5.04

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30



2000-09-29

STERILE EO



Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.50mm x 32mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.50mm x 32mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.50mm x 32mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

5.00mm
x32mm

Contents (1)

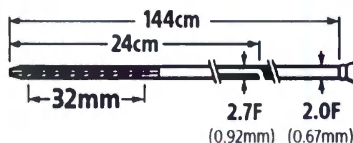

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	5.00mm Stent I.D.
8 - 814	4.62
9 - 910	4.73
10 - 1014	4.85
11 - 1117	NOMINAL 4.95
12 - 1213	5.03
13 - 1317	5.11
14 - 1420	5.17
15 - 1517	5.22
16 - 1620	RATED* 5.28
17 - 1724	5.34
18 - 1827	5.39
19 - 1924	5.45
20 - 2027	5.50

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE



IRU-bes.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

5.00mm x 32mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056

(17)000930(10)12345678

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

5.00mm x 32mm

REF H74900000000000

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

5.00mm x 32mm

REF H74900000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056

(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



UDC

(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.25mm
x38mm

Contents (1)

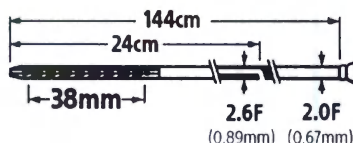

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C **K** 25°C **R** Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	2.25mm Stent I.D.
8 - 814	--
9 - 910	2.13
10 - 1014	2.19
11 - 1117	NOMINAL 2.24
12 - 1213	2.28
13 - 1317	2.31
14 - 1420	2.35
15 - 1517	2.37
16 - 1620	2.40
17 - 1724	2.43
18 - 1827	RATED* 2.45
19 - 1924	2.48
20 - 2027	2.51

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 38mm
REF H7490000000000
EXP 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 38mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.25mm x 38mm
REF H7490000000000
EXP 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

EXP 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.50mm
x38mm

Contents (1)

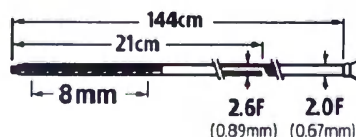

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C - 15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	2.50mm Stent I.D.
8 - 814	2.35
9 - 910	2.42
10 - 1014	2.48
11 - 1117	NOMINAL 2.54
12 - 1213	2.59
13 - 1317	2.63
14 - 1420	2.67
15 - 1517	2.70
16 - 1620	2.73
17 - 1724	2.76
18 - 1827	RATED* 2.79
19 - 1924	2.82
20 - 2027	2.85

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bed.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 38mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 38mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 38mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.75mm
x38mm

Contents (1)

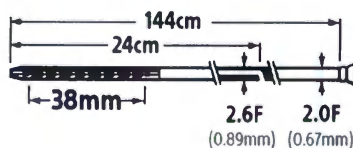

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GM ≤ 0.014 in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥ 5 F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	2.75mm Stent I.D.
8 - 814	2.57
9 - 910	2.65
10 - 1014	2.72
11 - 1117	NOMINAL 2.79
12 - 1213	2.85
13 - 1317	2.89
14 - 1420	2.93
15 - 1517	2.96
16 - 1620	3.00
17 - 1724	3.03
18 - 1827	RATED* 3.06
19 - 1924	3.10
20 - 2027	3.13

*Rated Burst Pressure DO NOT EXCEED

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bos.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

2.75mm x 38mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

2.75mm x 38mm

REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

2.75mm x 38mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

UDI

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.00mm
x38mm

Contents (1)

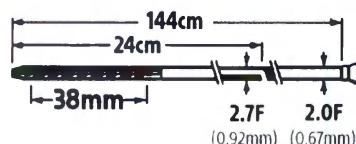

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	3.00mm Stent I.D.
8 - 814	2.89
9 - 910	2.96
10 - 1014	3.02
11 - 1117	NOMINAL 3.08
12 - 1213	3.13
13 - 1317	3.17
14 - 1420	3.20
15 - 1517	3.24
16 - 1620	RATED* 3.27
17 - 1724	3.32
18 - 1827	3.37
19 - 1924	3.43
20 - 2027	3.49

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Barcode



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.00mm x 38mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056

(17)000930(10)12345678

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.00mm x 38mm

REF H74900000000000

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.00mm x 38mm

REF H74900000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056

(17)000930(10)12345678

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.50mm
x 38mm

Contents (1)

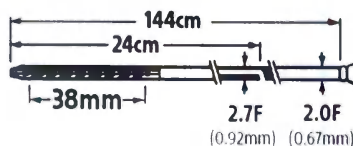

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

GM ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C - 15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm	kPa	3.50mm Stent I.D.
8 - 814		3.30
9 - 910		3.40
10 - 1014		3.48
11 - 1117	NOMINAL	3.55
12 - 1213		3.61
13 - 1317		3.66
14 - 1420		3.70
15 - 1517		3.74
16 - 1620	RATED*	3.79
17 - 1724		3.83
18 - 1827		3.87
19 - 1924		3.93
20 - 2027		3.99

* Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.



2000-09-29

STERILE

IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 38mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000


(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 38mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.50mm x 38mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

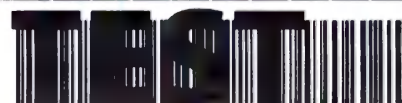

(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

4.00mm
x38mm

Contents (1)

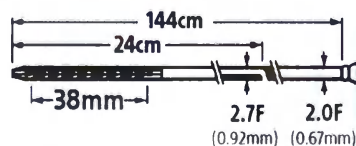

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GR ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	4.00mm Stent I.D.
8 - 814	3.81
9 - 910	3.91
10 - 1016	3.98
11 - 1117	NOMINAL 4.05
12 - 1213	4.12
13 - 1317	4.17
14 - 1420	4.22
15 - 1517	4.26
16 - 1620	RATED* 4.30
17 - 1724	4.36
18 - 1827	4.42
19 - 1924	4.52
20 - 2027	--

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30



2000-09-29

STERILE EO



Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.00mm x 38mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.00mm x 38mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.00mm x 38mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.50mm
x48mm

Contents (1)

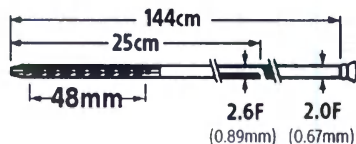

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C
25°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



atm - kPa Pressure	2.50mm Stent I.D.
8 - 814	2.35
9 - 910	2.42
10 - 1014	2.48
11 - 1117	NOMINAL 2.54
12 - 1213	2.59
13 - 1317	2.63
14 - 1420	2.67
15 - 1517	2.70
16 - 1620	2.73
17 - 1724	2.76
18 - 1827	RATED* 2.79
19 - 1924	2.82
20 - 2027	2.85

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE



IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 48mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 48mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
2.50mm x 48mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

2.75mm
x48mm

Contents (1)

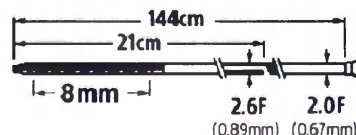

ID 3.50mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C
15°C **K** 25°C R Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



RH Protect from
Humidity



atm	kPa	2.75mm Stent I.D.
8 - 814		2.57
9 - 910		2.65
10 - 1014		2.72
11 - 1117	NOMINAL	2.79
12 - 1213		2.85
13 - 1317		2.90
14 - 1420		2.93
15 - 1517		2.96
16 - 1620		3.00
17 - 1724		3.03
18 - 1827	RATED*	3.06
19 - 1924		3.10
20 - 2027		3.13

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSL Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE



IFU-bed.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

2.75mm x 48mm

REF H7490000000000

EXP 2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

2.75mm x 48mm

REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD

2.75mm x 48mm

REF H7490000000000

EXP 2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

EXP 2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

UOM

This product may be protected by one or more patents. Patent information can
be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.00mm
x48mm

Contents (1)

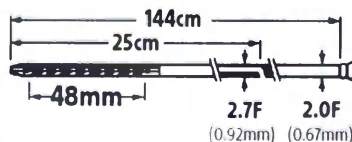

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter



30°C - 15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.00mm Stent I.D.
8 - 814	2.89
9 - 910	2.96
10 - 1014	3.02
11 - 1117	NOMINAL 3.08
12 - 1219	3.19
13 - 1317	3.17
14 - 1420	3.20
15 - 1517	3.24
16 - 1620	RATED* 3.27
17 - 1724	3.32
18 - 1827	3.37
19 - 1924	3.43
20 - 2027	3.49

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED



2000-09-29

STERILE



Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.00mm x 48mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.00mm x 48mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
3.00mm x 48mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

3.50mm
x 48mm

Contents (1)

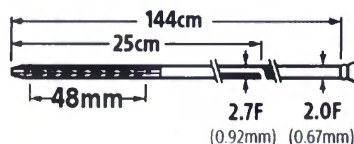

ID 4.25mm
Maximum Stent Inner Diameter

GR ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

EC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

30°C
15°C **K** 25°C **R** Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.50mm Stent I.D.
8 - 814	3.30
9 - 910	3.40
10 - 1014	3.48
11 - 1117	NOMINAL 3.55
12 - 1213	3.61
13 - 1317	3.66
14 - 1420	3.70
15 - 1517	3.74
16 - 1620	RATED* 3.79
17 - 1724	3.83
18 - 1827	3.87
19 - 1924	3.93
20 - 2027	3.99

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294156-01



2000-09-29

STERILE EO



IFU-bst.com

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.50mm x 48mm

REF H7490000000000

EXP 2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.50mm x 48mm

REF H7490000000000

Boston Scientific

SYNERGY™ XD

3.50mm x 48mm

REF H7490000000000

EXP 2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

EXP 2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can
be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific


SYNERGY™ XD

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

4.00mm
x48mm

Contents (1)

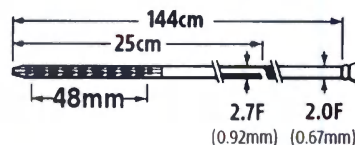

ID 5.75mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

30°C Store at 25°C (77°F);
15°C excursions permitted to
25°C 15°C - 30°C (59°F - 86°F)



Protect from
Humidity



atm	kPa	4.00mm Stent I.D.
8 - 814		3.81
9 - 910		3.91
10 - 1014		3.98
11 - 1117	NOMINAL	4.06
12 - 1213		4.12
13 - 1317		4.17
14 - 1420		4.22
15 - 1517		4.26
16 - 1620	RATED*	4.30
17 - 1724		4.36
18 - 1827		4.42
19 - 1924		4.52
20 - 2027		—

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

Internal BSC Bar Code



51294156-01

2000-09-29

STERILE EO



Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.00mm x 48mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.00mm x 48mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY™ XD
4.00mm x 48mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729980056
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729980056(17)000930(10)12345678

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™


MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsystem, Στέντ για στεφανιαίου stent πλάτινο-χρυσίου εκλούον everolimus, Sistema de Stent Coronário de Crômio e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerande koronarstentsystem i platina-krom, Everolimus-kibocsátó platina-krómszívkoronázór-szertrendszér, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wienkowego ze stopu platyny i chromu uwalniającego everolimus, Everolimus-avgivende koronarstentsystem av platinakrom, Everolimus Salinimi Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapautava platinakrominen sepehvaltimostentijäjestelmä, Sistem de stent coronarian cu elutie de Everolimus din aliaj de platină si crom, System chrom-platinových koronárných stentů uvolňujících everolimus, Κορονάρια stent σκίσμα οί cnpaa na nraieua x xpo c epykaue na everolimus, Systav koronarnog stenta od platine i kroma koj izlukaue everolimus, Everolimus elueeniva platinakroomist koronarstendi süsteem, Everolimu izdaloša platina hroma koronárš stenta sistema, Everolimus Rikiniandio platinos ir chromo vainikinyj arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

3.50mm
x8mm

Contents (1)

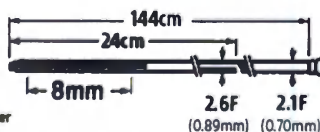

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.50mm Stent I.D.	Stent O.D.
8 - 814	3.18	3.37
9 - 910	3.29	3.48
10 - 1014	3.38	3.57
11 - 1117	NOMINAL	3.48
12 - 1213		3.56
13 - 1317		3.63
14 - 1420		3.69
15 - 1517		3.74
16 - 1620	RATED*	3.78
17 - 1724		3.83
18 - 1827		3.87
19 - 1924		3.93
20 - 2027		3.98

*Rated Burst Pressure, DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294155-01

2000-09-29

MD

STERILE EO

IFU-bcd.com



CAS No. 7440-08-4



Protect from Humidity



30°C
15°C



Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 8mm
REF H7490000000000
LOT 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 8mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 8mm
REF H7490000000000
LOT 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX
Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™


MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsystem, Σύστημα στεφανιαίου stent πλῆκτινός-χρυσίου έκδοσης everolimus, Sistema de Stent Coronário de Cromo e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarstentsystem i platina-krom, Everolimus-kibocsátó platina-krómszűkösorűér-szientrendszer, Systém chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wienkowego ze stopu platyny i chromu uwalniającego everolimus, Everolimus-avgivende koronarstentsystem av platinakrom, Everolimus Salinimi Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepehvaltimostentijäjestelmä, Sistem de stent coronarian cu eluție de Everolimus din aliaj de platină și crom, Systém chróm-platinových koronárných stentov uvoľňujúcich everolimus, Коронарна стент система от сплава из платина и хром с выткане на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus, Everolimus elueeriva platinakroomist koronarstendi süsteem, Everolimu izdaloša platina hroma koronárá stenta systému, Everolimus išskiriančio platinos ir chromo vainikinių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

4.00mm
x8mm

Contents (1)

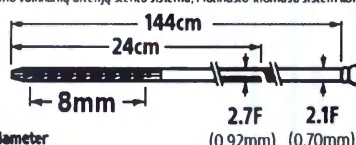

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.00mm Stent I.D.	Stent O.D.
8 - 814	3.64	3.83
9 - 910	3.76	3.95
10 - 1014	3.87	4.06
11 - 1117	NOMINAL	3.98 4.17
12 - 1213		4.07 4.26
13 - 1317		4.15 4.34
14 - 1420		4.21 4.40
15 - 1517		4.27 4.46
16 - 1620	RATED*	4.32 4.51
17 - 1724		4.37 4.56
18 - 1827		4.41 4.60
19 - 1924		4.47 4.66
20 - 2027		4.53 4.72

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294155-01

2000-09-29

MD

STERILEEO

IRU-bcd.com



CAS No. 7440-48-4



Protect from Humidity



30°C Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 8mm
REF H7490000000000
LOT 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 8mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 8mm
REF H7490000000000
LOT 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX
Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™


MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarsstentsysteem, Σύστημα στεφανιαίου stent πλάτινoς-χρoμίου έκλυσης everolimus, Sistema de Stent Coronário de Crômio e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarsstentsysteem i platina-krom, Everolimus-kibocsátó platina-krom szívkoszorúér-sz.tendrszer, Systém chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wienicowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-avgivende koronarsstentsystem av platinakrom, Everolimus Salinimli Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepelvaltimostenttijärjestelmä, Sistem de stent coronarian cu elutie de Everolimus din aliaj de platină si crom, Systém chrom-platinových koronárných stentov uvolňujúcich everolimus, Коронарный стент системы от сплава из платины и хрома с выделением everolimus, Systav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlucuje everolimus, Everolimus-elueriva platinakroomist koronaarstendi süsteem, Everolimu izdalosa platina hroma koronár stenta systému, Everolimus išskiriančio platinos ir chromo vainikinių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

4.50mm
x8mm

Contents (1)

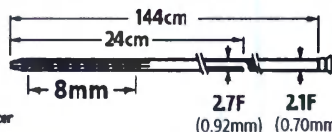

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.50mm Stent I.D. Stent O.D.	
8 - 814	4.13	4.32
9 - 910	4.26	4.45
10 - 1014	4.37	4.56
11 - 1117	NOMINAL	4.49
12 - 1213		4.59
13 - 1317		4.67
14 - 1420		4.75
15 - 1517		4.80
16 - 1620	RATED*	4.87
17 - 1724		4.92
18 - 1827		4.97
19 - 1924		5.04
20 - 2027		5.10

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294155-01

2000-09-29

MD

STERILE EO

IFU-bcd.com



CAS No. 1440-48-4



Protect from Humidity



30°C
15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 8mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 8mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 8mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronarico in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus-eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsysteem, Σύντηξη στεφανιαίου stent πλάτιν-χρυσίου εκκλυουσής everolimus, Sistema de Stent Coronário de Crômio e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-elueriende koronarstentsysteem i platina-krom, Everolimus-kibocsátó platina-krom szivkoszorúér-sztentrendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wienkowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-avgivende koronarstentsystem av platinakrom, Everolimus Salinmli Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapautava platinakrominen sepevaltimostenttijäjestelmä, Sistem de stent coronarian cu elutie de Everolimus din aliaj de platină si crom, Systém chrom-platinových koronárných stentov uvolňujúcich everolimus, Коронарный стент системы от сплава на платине и хром с элюацией на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus, Everolimus elueeriva platinakroomist koronaarstendi süsteem, Everolimu izdaloša platina hroma koronara stenta sistema, Everolimus šķīdinātāo platīnos ir hroma vālnitīnīj stenta sistēma, Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

5.00mm
x8mm



(1)

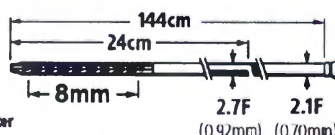

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

CC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	5.00mm Stent I.D. Stent O.D.	
8 - 814	4.59	4.78
9 - 910	4.73	4.92
10 - 1014	4.86	5.05
11 - 1117	NOMINAL	4.97 5.16
12 - 1213	5.07	5.26
13 - 1317	5.16	5.35
14 - 1420	5.24	5.43
15 - 1517	5.30	5.49
16 - 1620	RATED*	5.36 5.55
17 - 1724	5.42	5.61
18 - 1827	5.47	5.66
19 - 1924	5.52	5.71
20 - 2027	5.57	5.76

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294155-01

2000-09-29

MD

STERILE

IFU-bsci.com



CAS No. 1440-48-4



RH Protect from Humidity



30°C
15°C

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 8mm
REF H7490000000000
LOT 2000-09-30
12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 8mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 8mm
REF H7490000000000
LOT 2000-09-30
12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™


MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsystem, Σύστημα στεφανιαίου stent πλάτινιο-χρυσίου έκλυσης everolimus, Sistema de Stent Coronário de Crômio e Platina com Elução de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarstentsystem i platina-krom, Everolimus-kibocsátó platina-krom szívkoszorúér-sztentrendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wienkowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-avgvnde koronarstentsystem av platinakrom, Everolimus Salinmli Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapautava platinakrominen sepevaltimostenttijärjestelmä, Sistem de stent coronarian cu eluție de Everolimus din aliaj de platină și crom, Systém chrom-platinových koronárných stentů uvolňujících everolimus, Коронарный стент система от сплава на платина и хром с элюацией на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus, Everolimus elueeriva platinakroomist koronaarstendi süsteem, Everolimu izdalosa platina hroma koronara stenta sistema, Everolimus kškinandio platinos ir chromo vainikinių arterijų stento sistema, Platinasto-kromastis sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

3.50mm
x12mm

Contents (1)

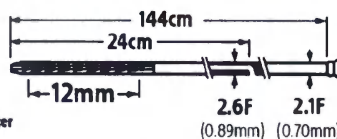

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678

2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.50mm Stent I.D. Stent O.D.	
8 - 814	3.18	3.37
9 - 910	3.29	3.48
10 - 1014	3.38	3.57
11 - 1117	NOMINAL	3.48
12 - 1213		3.56
13 - 1317		3.63
14 - 1420		3.69
15 - 1517		3.74
16 - 1620	RATED*	3.78
17 - 1724		3.82
18 - 1827		3.87
19 - 1924		3.93
20 - 2027		3.98

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294155-01

2000-09-29

MD

STERILE

IFU-bcd.com



CAS No. 7440-48-4



Protect from Humidity



30°C Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 12mm
REF H74900000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 12mm
REF H74900000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 12mm
REF H74900000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarsysteem, Eüo trüya o tefoavioü stent n Aotivac-çpauüou everolimus, Sistema de Stent Coronário de Crómio e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerande koronarsysteem i platina-krom, Everolimus-kibocsáló platina-krom szívtoszorúér-szélendrszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wielokowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-avgivnde koronarsistem av platinakrom, Everolimus Salimiml Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapautava platinakrominen sepehvaltimostenttijajestelmä, Sistem de stent coronarian cu eluție de Everolimus din alaij de platină și crom, System chrom-platinových koronárných stentov uvoľňujúcich everolimus, Коронарна стент система от сплав на платина и хром с елуиране на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus, Everolimus elueeriva platinakroomist koronarsendi süsteem, Everolimu izdalola platina hroma koronara stenta sistema, Everolimus itiskirānāo platinos ir chromo vainikinių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

4.00mm
x12mm



(1)

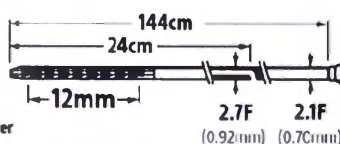

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT 12345678

2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.00mm Stent I.D.	Stent O.D.
8 - 814	3.64	3.83
9 - 910	3.76	3.95
10 - 1014	3.87	4.06
11 - 1117	NOMINAL	3.93
12 - 1213		4.07
13 - 1317		4.15
14 - 1420		4.21
15 - 1517		4.27
16 - 1620	RATED*	4.32
17 - 1724		4.37
18 - 1827		4.41
19 - 1924		4.47
20 - 2027		4.53

*Rated Burst Pressure - DO NOT EXCEED

Internal BSC Bar Code



51294155-01

2000-09-29

MD

STERILE EO

IFU-bcd.com



CAS No. 7440-48-4



RH Protect from Humidity



30°C
15°C

Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 12mm
REF H7490000000000
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 12mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 12mm
REF H7490000000000
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus. Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus. Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem. Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus. Everolimus-eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom. Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsysteem. Σύντηξη ο τοξοειδούς stent πλατινίου-χρυσίου εκλούσης everolimus. Sistema de Stent Coronário de Crômio e Platina com Eluição de Everolimus. Everolimus-eluerende koronarstentsystem i platina-krom. Everolimus-kibocsátó platina-krom szívkoszorúér-sztentrendszer. Systém chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus. System stentu wienicowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus. Everolimus-avgivende koronarstentsystem av platinakrom. Everolimus Salinimli Platin Krom Koroner Stent Sistemi. Everolimuusia vapauttava platinakrominen sepelvaltimostenttijärjestelmä. Sistem de stent coronarian cu elutie de everolimus din aliaj de platină și crom. Systém chróm-platinových koronárných stentov uvoľňujúcich everolimus. Коронарна стент система от сплава на платина и хром с высвобождением everolimus. Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus. Everolimus elueeriva platinakroomist koronaarstendi süsteem. Everolimu izdaloča platina hroma koronárá stenta systému. Everolimus išskiriančio platinos ir chromo vaizikinių arterijų stento sistema. Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

4.50mm
x12mm



(1)



ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.50mm Stent I.D. Stent O.D.	
8 - 814	4.13	4.32
9 - 910	4.26	4.45
10 - 1014	4.37	4.56
11 - 1117	NOMINAL	4.49 4.68
12 - 1213	4.59	4.78
13 - 1317	4.67	4.86
14 - 1420	4.75	4.94
15 - 1517	4.80	4.99
16 - 1620	RATED*	4.87 5.06
17 - 1724	4.92	5.11
18 - 1827	4.97	5.16
19 - 1924	5.04	5.23
20 - 2027	5.10	5.29

Rated Burst Pressure DO NOT EXCEED

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code

51294155-01

2000-09-29

MD

STERILE

IFU-bcs.com



CAS No. 7440-48-4



RH Protect from Humidity



30°C
15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 12mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 12mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 12mm
REF H7490000000000

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsystem, Σύστημα στεφανιαίου stent πλάτινoς-χρoυπίου εκλούoνoς everolimus, Sistema de Stent Coronário de Cromium e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerande koronarstentsystem i platina-krom, Everolimus-kibocsáló platina-krom szívkoszorúér-szilentrendszer, Systém chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wienkowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-avgibende koronarstentsystem av platinakrom, Everolimus Salinmli Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepelvaltimostenttijärjestelmä, Sistem de stent coronarian cu eluție de Everolimus din aliaj de platină și crom, Systém chróm-platinových koronárných stentov uvoľňujúcich everolimus, Коронарный стент системы от сплава на платине и хром с выливанием на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus, Everolimus elueeriva platinakroomist koronaarstendi süsteem, Everolimu izdaloša platina hroma koronara stenta sistema, Everolimus išsisklaido platinos ir chromo vainikinių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

5.00mm
x12mm

Contents (1)



ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

CC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	5.00mm Stent I.D.	Stent O.D.
8 - 814	4.59	4.78
9 - 910	4.73	4.92
10 - 1014	4.86	5.05
11 - 1117	NOMINAL	4.97 5.16
12 - 1213		5.07 5.26
13 - 1317		5.16 5.35
14 - 1420		5.24 5.43
15 - 1517		5.30 5.49
16 - 1620	RATED*	5.36 5.55
17 - 1724		5.42 5.61
18 - 1827		5.47 5.66
19 - 1924		5.52 5.71
20 - 2027		5.57 5.76

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



2000-09-29

MD

STERILE

IFU-bcsd.com

CAS No. 7440-88-4

Protect from Humidity

Protect from Humidity

30°C

25°C

15°C

Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 12mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 12mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 12mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX
Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgegebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus-eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsysteem, Σύστημα στεφανιαίου stent πλάτινο-χρυσίου έκδοσης everolimus, Sistema de Stent Coronário de Cromo e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarstentsysteem i platina-krom, Everolimus-libocsátó platina-krom szívkoszorúér-szertérendszér, Systém chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wienicowego ze stopu platyny i chromu uwalnijający everolimus, Everolimus-avgive nde koronarstentsystem av platinakrom, Everolimus Salımlı Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepehättimöslentijäjestelmä, Sistem de stent coronarian cu eluție de Everolimus din aliaj de platină și crom, Systém chróm-platinových koronárných stentov uvoľňujúcich everolimus, Копонанна стент сістэма от сплава на платина и хром с елуіраве на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlucuje everolimus, Everolimus elueeniva platinakroomist koronaarstendi süsteem, Everolimu izdaloša platina hroma koronara stenta sistema, Everolimus Ištifançlo platinos ir chromo valniklini arteriju stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronamega stenta za ekliiranje everolimusa

3.50mm
x16mm



Contents (1)

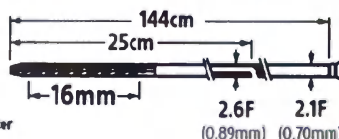

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.50mm Stent I.D. Stent O.D.	
8 - 814	3.18	3.37
9 - 910	3.29	3.48
10 - 1014	3.38	3.57
11 - 1117	NOMINAL	3.43 3.67
12 - 1213		3.56 3.75
13 - 1317		3.63 3.82
14 - 1420		3.69 3.88
15 - 1517		3.74 3.93
16 - 1620	RATED*	3.78 3.97
17 - 1724		3.83 4.02
18 - 1827		3.87 4.06
19 - 1924		3.93 4.12
20 - 2027		3.98 4.17

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code

51294155-01

2000-09-29

MD

STERILE

IFU-bed.com

MR

CAS No. 7440-48-4

MR

RH

Protect from
Humidity

RH

30°C
15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 16mm
REF H74900000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 16mm
REF H74900000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 16mm
REF H74900000000000

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX
Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™
MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus. Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus. Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem. Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus. Everolimus-eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom. Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsysteem. Σύστημα στεφανιαίου stent πλάτινο-χρυσίου εκλούον everolimus. Sistema de Stent Coronário de Cromium e Platina com Elução de Everolimus. Everolimus-eluerende koronarstentsysteem i platina-krom. Everolimus-kibocsátó platina-krom szivkoszorű-szertrendszer. System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus. System stentu wieńcowego ze stopu platyny i chromu uwalnijający ewerolimus. Everolimus-avgivnde koronarstentsystem av platinakrom. Everolimus Salınımlı Platin Krom Koroner Stent Sistemi. Everolimusia vapiaklava platinakrominen sepevaltimosientijärjestelmä. Sistem de stent coronarian cu eluție de Everolimus din aliaj de platină și crom. System chrom-platinových koronárných stentov uvoľňujúcich everolimus. Коронарна стент система от сплава на платина и хром с елуиране на everolimus. Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus. Everolimus elueenva platinakroomist koronaarstendi süsteem. Everolimu izdaloša platina hroma koronara stenta sistema. Everolimus išskiriamas platinos ir chromo vainikinių arterijų stento sistema. Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa.

**4.00mm
x16mm**



Contents (1)

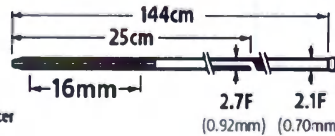

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN 0000000000000000

REF H7490000000000

LOT 12345678 2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.00mm Stent I.D. Stent O.D.	
8 - 814	3.64	3.83
9 - 910	3.76	3.95
10 - 1014	3.87	4.06
11 - 1117	NOMINAL	3.98
12 - 1213	4.07	4.26
13 - 1317	4.15	4.34
14 - 1420	4.21	4.40
15 - 1517	4.27	4.46
16 - 1620	RATED*	4.32
17 - 1724	4.37	4.56
18 - 1827	4.41	4.60
19 - 1924	4.47	4.66
20 - 2027	4.53	4.72

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code

51294155-01

2000-09-29

MD **STERILE** **EO** IFU-bed.com

CAS No. 7440-48-4

RH Protect from Humidity

30°C Store at 25°C (77°F); excursions permitted to 15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 16mm
REF H74900000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 0000000000000000

(01)08714729985259 (17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 16mm
REF H74900000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 16mm
REF H74900000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 0000000000000000

(01)08714729985259 (17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259 (17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerende coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsystem, Σύντημα οτεζαυαίου stent πλάτινοχρυσίου έκδοσης everolimus, Sistema de Stent Coronário de Cromium e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarstentsystem i platina-krom, Everolimus-kibocsátó platina-krom szívkoszorúér-sztentrendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wieńcowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-avgivende koronarstentsystem av platinakrom, Everolimus Salınımlı Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepevaltimostentijäjestelmä, Sistem de stent coronarian cu elutie de Everolimus din aliaj de platină și crom, Systém chróm-platinových koronárných stentov uvoľňujúcich everolimus, Корунарна стент система от сплава на платина и хром с елюацией на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlubljuje everolimus, Everolimus elueeriva plaatnakroomist koronaarstendi süsteem, Everolimu izdaloša pladina hroma koronara stenta sistema, Everolimus išskiriančio platinos ir chromo vaikininių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronamega stenta za eluiranje everolimusa

4.50mm
x16mm



(1)

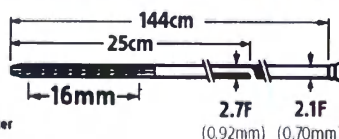

ID 6.00mm

Maximum Stent Inner Diameter



≤0.014in (0.36mm)

Recommended Guidewire



≥6F (0.070in/1.78mm)

Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.50mm Stent I.D. Stent O.D.	
8 - 814	4.13	4.32
9 - 910	4.26	4.45
10 - 1014	4.37	4.56
11 - 1117	NOMINAL	4.49
12 - 1213		4.59
13 - 1317		4.67
14 - 1420		4.75
15 - 1517		4.80
16 - 1620	RATED*	4.87
17 - 1724		4.92
18 - 1827		4.97
19 - 1924		5.04
20 - 2027		5.10

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



S1294155-01



2000-09-29



STERILE EO



IFU-bcsd.com



CAS No. 7440-48-4



Protect from
Humidity



30°C
15°C

Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 16mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 16mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 16mm
REF H7490000000000

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX
Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific


SYNERGY MEGATRON™
MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus-eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsystem, Ústřední otevírací stent s aktivací uvolňování everolimus, Sistema de Stent Coronario de Cromio e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarstentsystem i platina-krom, Everolimus-kibocsátó platina-krom szivkoszorú-sz lentrendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wielokowego ze stopu platyny i chromu uwalniającego everolimus, Everolimus-avgivende koronarstentsystem av platinakrom, Everolimus Salinimi Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepevaltimostentijäjestelmä, Sistem de stent coronarian cu eluție de Everolimus din aliaj de platină și crom, System chrom-platinových koronárných stentů uvolňujících everolimus, Коронарна стент система от сплава на платина и хром с елюяние на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus, Everolimus elueeriva platinakroomist koronaarstendi süsteem, Everolimus izdaloša platina hroma koronara stenta sistema, Everolimus kštiriančio platinos ir chromo vaikinlių arterijų stento sistema, Platinado-kromasti sidem koronamega stenta za eluiranje everolimusa

5.00mm
x16mm

 Contents (1)

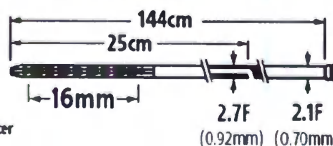

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW s0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	5.00mm Stent I.D. Stent O.D	
8 - 814	4.59	4.78
9 - 910	4.73	4.92
10 - 1014	4.86	5.05
11 - 1117	NOMINAL	4.97 5.16
12 - 1213		5.07 5.26
13 - 1317		5.16 5.35
14 - 1420		5.24 5.42
15 - 1517		5.30 5.49
16 - 1620	RATED*	5.36 5.55
17 - 1724		5.42 5.61
18 - 1827		5.47 5.66
19 - 1924		5.52 5.71
20 - 2027		5.57 5.76

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.



 2000-09-29

MD

STERILE

 IFU-bcsd.com



CAS No. 7440-48-4





RH Protect from Humidity



30°C
15°C  Store at 25°C (77°F); excursions permitted to 15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 16mm
REF H74900000000000
LOT 12345678
GTIN 00000000000000
2000-09-30

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 16mm
REF H74900000000000
LOT 12345678
GTIN 00000000000000
2000-09-30

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 16mm
REF H74900000000000

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific


SYNERGY MEGATRON™ MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsystem, Στοιχία στεφανιαίου stent ηλκτινός χρυσίου έκδοσης everolimus, Sistema de Stent Coronário de Cromo e Platina com Elução de Everolimus, Everolimus-eluerande koronarstentsystem i platina-krom, Everolimus-izbocsáló platina-krom szívkoronár-szertendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu uvolňowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-angivnde koronarstentsystem av platinakrom, Everolimus Salinimli Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepevaltimostentijärjestelmä, Sistem de stent coronarian cu elutie de Everolimus din alai de platină și crom, Systém chrom-platinových koronárných stentů uvolňujících everolimus, Коронарный стент система от сплава на платина и хром с elyпaнeм на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus, Everolimus elueeriva plaatnakroomist koronaaistendi süsteem, Everolimu izdalosa platina hroma koronara stenta sistema, Everolimus išleidantis platinos ir chromo vaizidinių arterijų stento sistema, Platinasto-kromastil sistem koronamega stenta za eluiranje everolimusa

3.50mm
x20mm

Contents (1)

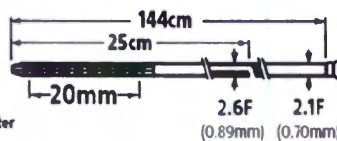

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm	kPa	3.50mm Stent I.D.	Stent O.D.
8 - 814		3.18	3.37
9 - 910		3.29	3.48
10 - 1014		3.38	3.57
11 - 1117	NOMINAL	3.48	3.67
12 - 1213		3.56	3.75
13 - 1317		3.63	3.82
14 - 1420		3.69	3.88
15 - 1517		3.74	3.93
16 - 1620	RATED*	3.78	3.97
17 - 1724		3.83	4.02
18 - 1827		3.87	4.06
19 - 1924		3.93	4.12
20 - 2027		3.98	4.17

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.



2000-09-29

MD STERILEEO IFU-bcd.com

CAS No. 7440-08-4

Protect from Humidity

Store at 25°C (77°F); excursions permitted to 15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 20mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 20mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 20mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus-eluerende coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarslentsystem, Izoetnja o tečevnici stent na aktivac xpauiouo everolimus, Sistema de Stent Coronário de Crômio e Platina com Elução de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarslentsystem i platina-krom, Everolimus-kibocsáló platina-krom szivkoszorű-szlentszender, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wieńcowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-avgivnde koronarslentsystem av platina-krom, Everolimus Salınımlı Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepehltimstentti järjesteimä, Sistem de stent coronarian cu eluție de Everolimus din aliaj de platină și crom, Systém chróm-platinových koronárných stentov uvoľňujúcich everolimus, Копонарне стент сисгема от сплава на платина и хром с елування на everolimus, Systav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlucuje everolimus, Everolimus elueeriva platinakroomist koronarslentsi süsteem, Everolimu izdalota platina hroma koronara stenta sistema, Everolimus išskiriančio platinos ir chromo vainitinių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

4.00mm
x20mm



(1)

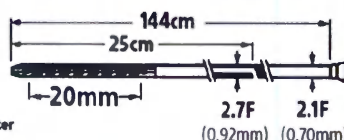

ID 6.00mm

Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)

Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)

Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.00mm Stent I.D.	Stent O.D.
8 - 814	3.64	3.83
9 - 910	3.76	3.95
10 - 1014	3.87	4.06
11 - 1117	NOMINAL	3.98 4.17
12 - 1213		4.07 4.26
13 - 1317		4.15 4.34
14 - 1420		4.21 4.40
15 - 1517		4.27 4.46
16 - 1620	RATED*	4.32 4.51
17 - 1724		4.37 4.56
18 - 1827		4.41 4.60
19 - 1924		4.47 4.66
20 - 2027		4.53 4.72

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code

51294155-01

2000-09-29

MD

STERILE EO

IFU-bed.com



CAS No. 7440-88-4



Protect from Humidity



30°C - 15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific

SYNERGY MEGATRON™

4.00mm x 20mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific

SYNERGY MEGATRON™

4.00mm x 20mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific

SYNERGY MEGATRON™

4.00mm x 20mm

REF H7490000000000

2000-09-30

LOT 12345678

GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™


MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronarico in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus-eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsystem, Iðóttngvað stentjaíðgjafkerfið everolimus, Sistema de Stent Coronário de Crômio e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerande koronarstentsystem i platina-krom, Everolimus-kibocsátó platina-krom szivkoszorűér-szertrendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wielocowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-avgivende koronarstentsystem av platinkrom, Everolimus Salimimi Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepevaltimostenttijärjestelmä, Sistem de stent coronarian cu elutie de Everolimus din aliaj de platină și crom, Systém chrom-platinových koronárných stentův uvolňujících everolimus, Копонарна стент оцрета от оцнаа на нлатина и хром с енуване на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus, Everolimus elueeriva platinakroomist koronaarstendi süsteem, Everolimu izdaloša platin hroma koronara stenta sistema, Everolimus išskiriančio platinos ir chromo vaikininių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

4.50mm
x20mm

Contents (1)

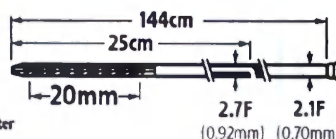

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure		4.50mm Stent I.D.	Stent O.D.
8 - 814		4.13	4.32
9 - 910		4.26	4.45
10 - 1014		4.37	4.56
11 - 1117	NOMINAL	4.49	4.68
12 - 1213		4.59	4.78
13 - 1317		4.67	4.86
14 - 1420		4.75	4.94
15 - 1517		4.80	4.99
16 - 1620	RATED*	4.87	5.06
17 - 1724		4.92	5.11
18 - 1827		4.97	5.16
19 - 1934		5.04	5.23
20 - 2027		5.10	5.29

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294155-01

2000-09-29

MD

STERILE EO

IFU-bcd.com



CAS No. 7440-48-4



Protect from
Humidity



30°C
15°C



Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 20mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 20mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 20mm
REF H7490000000000

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX
Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus-eluerende coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platina-krom koronarstentsysteem, Σύστημα στεφανιαίου stent πλάτινι-χρυσίου εκδοσής everolimus, Sistema de Stent Coronário de Cromo e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarstentsysteem i platina-krom, Everolimus-kibocsátó platina-krom szívkoszorúér-sztentrendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wieńcowego ze stopu platyny i chromu uwalniającego everolimus, Everolimus-avgivnde koronarstentsystem av platinakrom, Everolimus Salinimi Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepehaimosenttijäjeselmä, Sistem de stent coronarian cu elutie de Everolimus din aliaj de platină și crom, System chrom-platinových koronárných stentov uvolňujúcich everolimus, Копонарна стент система от сплава на платина и хром с елупаве на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus, Everolimus-elueeniva platinakroomist koronarstendi süsteem, Everolimus izdalosa platina hroma koronara stenta sistema, Everolimus Rstirančio platinos ir chromo vainilinių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronamega stenta za eluiranje everolimusa

5.00mm
x20mm



Contents (1)

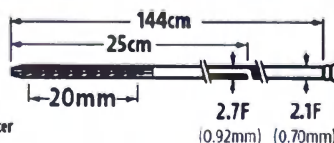

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	5.00mm Stent I.D.	Stent O.D.
8 - 814	4.59	4.78
9 - 910	4.73	4.92
10 - 1014	4.86	5.05
11 - 1117	NOMINAL	4.97
12 - 1213		5.07
13 - 1317		5.36
14 - 1420		5.34
15 - 1517		5.30
16 - 1620	RATED*	5.36
17 - 1724		5.42
18 - 1827		5.47
19 - 1924		5.52
20 - 2027		5.57

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294155-01



2000-09-29



IFU-bcsd.com



CAS No. 7440-48-4



Protect from Humidity



30°C
15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 20mm
REF H7490000000000
LOT 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 20mm
REF H7490000000000
LOT 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 20mm
REF H7490000000000

LOT 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarsystem, Sistema di stent coronarico in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus-eluerende coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarsysteem, Σύστημα στεφανιαίου stent πλάτινο-χρυσίου everolimus, Sistema de Stent Coronário de Cromo e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarsysteem i platina-krom, Everolimus-libocsáló platina-krom szívkoronár-szertrendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wieńcowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-avgiende koronarsysteem av platina-krom, Everolimus Salinimi Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepekkattimosisentijärjestelmä, Sistem de stent coronarian cu elutie de Everolimus din aliaj de platină și crom, System chrom-platinových koronárných stentů uvolňujících everolimus, Копонарна стент система от сплава на платина и хром с елюянием на everolimus, Systav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlucuje everolimus, Everolimus elueeniva platinakroomist koronaarstendi süsteem, Everolimu izdaloša platina hroma koronár stenta sistema, Everolimus išskiriančio platinos ir chromo vaikinčių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

3.50mm
x24mm



Contents (1)

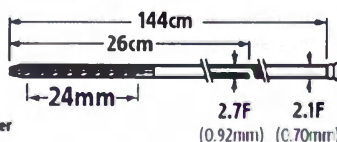

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN 00000000000000

REF H7490000000000

LOT 12345678 2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.50mm Stent I.D. Stent O.D.	
8 - 814	3.18	3.37
9 - 910	3.29	3.48
10 - 1014	3.38	3.57
11 - 1117	NOMINAL	3.48 3.67
12 - 1213		3.56 3.75
13 - 1317		3.63 3.82
14 - 1420		3.69 3.88
15 - 1517		3.74 3.93
16 - 1620	RATED*	3.78 3.97
17 - 1724		3.83 4.02
18 - 1827		3.87 4.06
19 - 1924		3.93 4.12
20 - 2027		3.98 4.17

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294155-01

2000-09-29

MD **STERILE EO** IFU-bed.com

CAS No. 7440-48-4

RH Protect from Humidity

30°C Store at 25°C (77°F); excursions permitted to 15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259 (17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 24mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259 (17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259 (17)000930 (10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™


MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebeendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerend coronaire-slechtsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsystem, Σύστημα στεφανιαίου stent πλάτιν-χρυσίου έκλυσης everolimus, Sistema de Stent Coronario de Cromo e Platina com Elução de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarstentsystem i platina-krom, Everolimus-kibocsátó platina-krómszükszorűér-szertrendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wieńcowego ze stopu platyny i chromu uwalniającego everolimus, Everolimus-angivende koronarstentsystem av platinakrom, Everolimus Salınım Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepehättimöstentijärjestelmä, Sistem de stent coronarian cu elutie de Everolimus din aliaj de platină și crom, System chróm-platinových koronárných stentov uvoľňujúcich everolimus, Коронарна стент система от сплава на платина и хром с елюацією на everolimus, Systav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlucuje everolimus, Everolimus elueeriva platinakroomist koronarstendi süsteem, Everolimu izdaloša platina hroma koronara stenta sistema, Everolimus išskiriančio platinos ir chromo vaizlinių arterijų stento sistema, Platinsto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

4.00mm
x24mm

Contents (1)

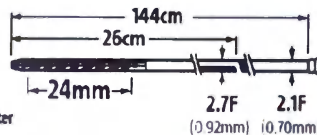

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678

2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.00mm Stent I.D.	Stent O.D.
8 - 814	3.64	3.83
9 - 910	3.76	3.95
10 - 1014	3.87	4.06
11 - 1117	NOMINAL	3.98 4.17
12 - 1213	4.07	4.26
13 - 1317	4.15	4.34
14 - 1420	4.21	4.40
15 - 1517	4.27	4.46
16 - 1620	RATED*	4.32 4.51
17 - 1724	4.37	4.56
18 - 1827	4.41	4.60
19 - 1924	4.47	4.66
20 - 2027	4.53	4.72

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294155-01

2000-09-29

MD

STERILE EO

IFU-bed.com



CAS No. 7440-48-4



Protect from Humidity



30°C (86°F)
15°C (59°F)
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 24mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™ MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus-eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsystem, Σύστημα στεφανιαίου στεντ πλάτινο-χρυσίου έκδοσης everolimus, Sistema de Stent Coronário de Cromo e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarstentsystem i platina-krom, Everolimus-kibocsátó platina-krom szívkoszorúér-szterendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wienącego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-avgivende koronarstentsystem av platinakrom, Everolimus Salinimi Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapautava platinakrominen sepehällimöstentijärjestelmä, Sistem de stent coronarian cu elutie de Everolimus din aliaj de platină și crom, System chroím-platinových koronárných stentů uvolňujících everolimus, Копования стент системы от хрома на платина и хром с еливанием на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlucuje everolimus, Everolimus elueeriva platinakroomist koronaarstendi süsteem, Everolimu izdaloša platina hroma koronara stenta sistema, Everolimus išskiriančio platinos ir chromo vainikinių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronamega stenta za eluiranje everolimusa


4.50mm
x24mm

Contents (1)

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter

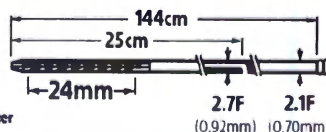

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.50mm Stent I.D.	Stent O.D.
8 - 814	4.13	4.32
9 - 910	4.26	4.45
10 - 1014	4.37	4.56
11 - 1117	NOMINAL	4.49
12 - 1213		4.59
13 - 1317		4.67
14 - 1420		4.75
15 - 1517		4.80
16 - 1620	RATED*	4.87
17 - 1724		4.92
18 - 1827		4.97
19 - 1924		5.04
20 - 2027		5.10
		5.29

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code

51294155-01

2000-09-29

MD

STERILEEO

IFU-bed.com



CAS No. 7440-48-4



Protect from
Humidity



30°C
15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 24mm
REF H74900000000000
LOT 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 24mm
REF H74900000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 24mm
REF H74900000000000
LOT 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 24mm
REF H74900000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX
Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema de stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerende coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platín-krom koronarstentsystem, Σύστημα στεφανιαίου stent πλάτιν-χρυσίου everolimus, Sistema de Stent Coronário de Crômio e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarstentsystem i platina-krom, Everolimus-libocsátó platina-krómszívkoszorúér-szertrendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wielokowego ze stopu platyny i chromu uwalnijający everolimus, Everolimus-avgivnde koronarstentsystem av platínakrom, Everolimus Salmimmi Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platínakrominen sepeháltimostentijärjestelmä, Sistem de stent coronarian cu elutie de Everolimus din aliaj de platină și crom, Systém chrom-platinových koronárných stentov uvolňujících everolimus, Коронарна стент система от сплава на платина и хром с елуиране на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus, Everolimus elueeriva platinakroomist koronaarstendi süsteem, Everolimu izdaloša platina hroma koronara stenta sistema, Everolimus išskiriančio platinos ir chromo vainiklinių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

5.00mm
x24mm



(1)

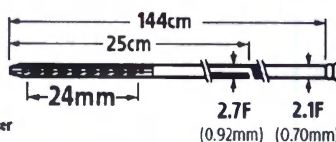

ID 6.00mm

Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)

Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)

Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678

2000-09-30

atm - kPa Pressure	5.00mm Stent I.D.	Stent O.D.
8 - 814	4.59	4.78
9 - 910	4.73	4.92
10 - 1014	4.86	5.05
11 - 1117	NOMINAL	4.97
12 - 1213		5.07
13 - 1317		5.16
14 - 1420		5.24
15 - 1517		5.30
16 - 1620	RATED*	5.36
17 - 1724		5.42
18 - 1827		5.47
19 - 1924		5.52
20 - 2027		5.57

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED

Internal BSC Bar Code



51294155-01

2000-09-29

MD

STERILE EO

IFU-bed.com



CAS No. 7440-88-4



Protect from Humidity



30°C - 25°C Store at 25°C (77°F); excursions permitted to 15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 24mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 24mm
REF H7490000000000

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus. Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus. Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem. Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus. Everolimus eluerende coronaire-stentsysteem van platina-chroom. Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsysteem. Στοιχια οτεφραξιου stent πλατινιου-χρωμιου ελευθιου everolimus. Sistema de Stent Coronário de Cromium e Platina com Eluição de Everolimus. Everolimus-eluerende koronarstentsystem i platina-krom. Everolimus-kibocsátó platina-krom szivkoszorúér-sztentrendszer. System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus. System stentu wielocowego ze stopu platyny i chromu uwalnijający everolimus. Everolimus-avgivende koronarstentsystem av platinakrom. Everolimus Salımlı Platin Krom Koroner Stent Sistemi. Everolimusia vapautava platinakrominen sepevaltimostentijärjestelmä. Sistem de stent coronarian cu elutie de Everolimus din aliaj de platină și crom. Systém chróm-platinových koronárných stentov uvoľňujúcich everolimus. Копкарна стент система от сплава на платина и хром с елиување на everolimus. Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus. Everolimus elueeriva platinakroomist koronarstendi süsteem. Everolimu izdaloša platina hroma koronara stenta sistema. Everolimus išsiskiriančio platinos ir chromo vainikinių arterijų stento sistema. Platinasto-kromasti sistem koronamega stenta za eluwanie everolimusu.

3.50mm
x28mm



Contents (1)

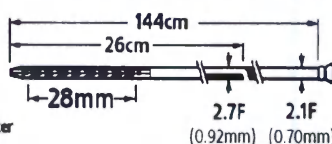

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	3.50mm Stent I.D.	Stent O.D.
8 - 814	3.18	3.37
9 - 910	3.29	3.48
10 - 1014	3.38	3.57
11 - 1117	NOMINAL	3.48
12 - 1213	3.56	3.75
13 - 1317	3.63	3.82
14 - 1420	3.69	3.88
15 - 1517	3.74	3.93
16 - 1620	RATED*	3.78
17 - 1724	3.83	4.02
18 - 1827	3.87	4.06
19 - 1924	3.93	4.12
20 - 2027	3.98	4.17

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294155-01

2000-09-29



CAS No. 7440-48-4



Protect from Humidity



30°C
15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 28mm
REF H74900000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 28mm
REF H74900000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 28mm
REF H74900000000000

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentensystem, Sistema de stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsysteem, Σύστημα στεφανιαίου stent πλάτινoς-χρoυoύ εκδοοής everolimus, Sistema de Stent Coronário de Cromium e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarstentsysteem i platina-krom, Everolimus-löbcsátó platina-krom szívkoszorúér-sz lentrendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wielokowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-avgivende koronarstentsystem av platinakrom, Everolimus Salınımlı Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepehättimostentijästelmä, Sistem de stent coronarian cu eluție de Everolimus din aliaj de platină și crom, System chrom-platinových koronárných stentů uvolňujících everolimus, Кoронapия cтent cиcтeмa cтo cнaн нa нaтaтнa и xpoм c eлyпaннe нa eвepoлимyс, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus, Everolimus elueenva platinakroomist koronarstendi süsteem, Everolimu izdaloša platina hroma koronár stenta sistema, Everolimus libštinančio platinos ir chromo vainikinių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluvanje everolimusa

4.00mm
x28mm



Contents (1)

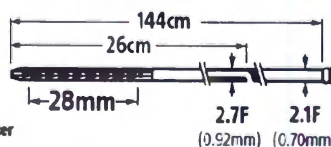

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.00mm Stent I.D. Stent O.D.	
8 - 814	3.64	3.83
9 - 910	3.76	3.95
10 - 1014	3.87	4.06
11 - 1117	NOMINAL	3.98 4.17
12 - 1213		4.07 4.26
13 - 1317		4.15 4.34
14 - 1430		4.21 4.40
15 - 1517		4.27 4.46
16 - 1620	RATED*	4.32 4.51
17 - 1724		4.37 4.56
18 - 1827		4.41 4.60
19 - 1924		4.47 4.66
20 - 2027		4.53 4.72

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code

51294155-01

2000-09-29

MD

STERILE

IFU-bed.com



CAS No. 7440-48-4



Protect from
Humidity



30°C
15°C

Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 28mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 28mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 28mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX
Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronarico in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsystem, Σύστημα στεφανιαίου stent πλατινίου-χρυσίου έκδοσης everolimus, Sistema de Stent Coronário de Cromo e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarstentsystem i platina-krom, Everolimus-kibocsátó platina-krom szívkoszorúér-szertrendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wieńcowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-avgivende koronarstentsystem av platinakrom, Everolimus Salınımlı Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepevaltimo stenttijärjestelmä, Sistem de stent coronarian cu eluție de Everolimus din aliaj de platina și crom, Systém chrom-platinových koronárných stentů uvolňujících everolimus, Коронарный стент системы от сплава на платине и хром с элюацией на everolimus, Systav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlubljuje everolimus, Everolimus elueeriva plaatnakroomist koronaarstendi süsteem, Everolimu izdaloša platina hroma koronara stenta sistema, Everolimus išskatinčio platinos ir chromo vainikinių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

4.50mm
x28mm



Contents (1)

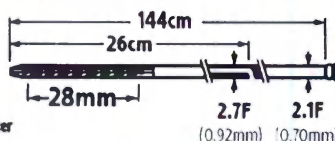

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN 000000000000000

REF H7490000000000

LOT 12345678 2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.50mm Stent I.D.	Stent O.D.
8 - 814	4.13	4.32
9 - 910	4.26	4.45
10 - 1014	4.37	4.56
11 - 1117	NOMINAL	4.49
12 - 1213		4.59
13 - 1317		4.67
14 - 1420		4.75
15 - 1517		4.80
16 - 1620	RATED*	4.97
17 - 1724		4.92
18 - 1827		4.97
19 - 1934		5.04
20 - 2027		5.10
		5.29

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294155-01

2000-09-29



STERILE



IFU-bed.com



CAS No. 7440-40-4



Protect from Humidity



30°C Store at 25°C (77°F); excursions permitted to 15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 28mm
REF H7490000000000
LOT 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 28mm
REF H7490000000000
LOT 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 28mm
REF H7490000000000

LOT 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus. Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus. Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem. Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus. Everolimus eluerende coronaire-stentsysteem van platina-chroom. Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsystem. Σύντηξη στεφανιαίου stent πλάτιν-χρυσίου εκλυούσης everolimus. Sistema de Stent Coronário de Cromo e Platina com Eluição de Everolimus. Everolimus-elueriende koronarstentsystem i platina-krom. Everolimus-kibocsátó platina-krom szívkoszorúér-sztentrendszer. System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus. System stentu wiertcowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus. Everolimus-avgivende koronarstentsystem av platinakrom. Everolimus Salinimli Platin Krom Koroner Stent Sistemi. Everolimusia vapautava platinakrominen sepehättimöstenttijärjestelmä. Sistem de stent coronarian cu eluție de Everolimus din aliaj de platină și crom. Systém chróm-platinových koronárných stentov uvoľňujúcich everolimus. Коронарный стент системы от сплава на платине и хром с вытравом на everolimus. Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus. Everolimus elueeriva plaatnakroomist koronaarstendi süsteem. Everolimu izdalosa platina hroma koronara stenta sistema. Everolimus išsirančio platinos ir chromo vainikinių arterijų stento sistema. Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

5.00mm
x28mm



(1)

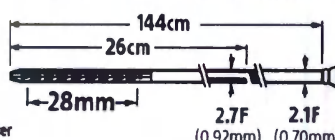

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	5.00mm Stent I.D. Stent O.D.	
8 - 814	4.59	4.78
9 - 910	4.73	4.92
10 - 1014	4.86	5.05
11 - 1117	NOMINAL	4.97
12 - 1213		5.07
13 - 1317		5.16
14 - 1420		5.24
15 - 1517		5.30
16 - 1620	RATED*	5.36
17 - 1724		5.42
18 - 1827		5.47
19 - 1924		5.52
20 - 2027		5.57

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



2000-09-29

MD

STERILE

IFU-bed.com



CAS No. 7440-40-4



RH Protect from Humidity



30°C Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 28mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 28mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 28mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronarico in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsysteem, Σύστημα στεφανιαίου stent ηλκτινίου χρυσίου έκλυσης everolimus, Sistema de Stent Coronário de Crômio e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-elueriende koronarstentsysteem i platina-krom, Everolimus-libocsáló platina-krórn szivkoszorúér-szlenrendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wiencowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-avgvnde koronarstentsistem av platinakrom, Everolimus Salimiki Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapautava platinakrominen sepevaltimostenttijärjestelmä, Sistem de stent coronarian cu eluție de Everolimus din alai de platină si crom, Systém chróm-platinových koronárných stentov uvolňujících everolimus, Коронарна стент система от сплав на платина и хром с елупане на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus, Everolimus elueeriva plaatnakroomist koronaarstendi süsteem, Everolimu izdaloša platin hroma koronárá stenta sistema, Everolimus išskiriančio platinos ir chromo vainikinių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronamega stenta za elukanje everolimusa

3.50mm
x32mm



(1)

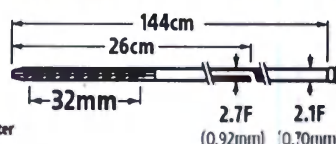

ID 6.00mm

Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)

Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)

Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT 12345678

2000-09-30

atm - kPa	3.50mm	Stent I.D.	Stent O.D.
Pressure			
8 - 814	3.18	3.37	
9 - 910	3.29	3.48	
10 - 1014	3.38	3.57	
11 - 1117	NOMINAL	3.48	3.67
12 - 1213		3.56	3.75
13 - 1317		3.63	3.82
14 - 1420		3.69	3.88
15 - 1517		3.74	3.93
16 - 1620	RATED*	3.78	3.97
17 - 1724		3.83	4.02
18 - 1827		3.87	4.06
19 - 1924		3.93	4.12
20 - 2027		3.98	4.17

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code

51294155-01

2000-09-29

MD

STERILE EO

IFU-bed.com

CAS No. 7440-88-4

Protect from Humidity

Protect from Humidity

Protect from Humidity

30°C - 15°C Store at 25°C (77°F); excursions permitted to 15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 32mm
REF H7490000000000
LOT 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 32mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
3.50mm x 32mm
REF H7490000000000
LOT 2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™


MONORAIL™

Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerende coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarsysteem, Σύστημα στεφανιαίου stent πλάτινoς-χρoμίου εκλούονg everolimus, Sistema de Stent Coronário de Cromium e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarsysteem i platina-krom, Everolimus-kibocsátó platina-krom szívkoszorűér-szertrendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wienowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-avgivende koronarsystem av platinakrom, Everolimus Salınımlı Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepevaltimosienttijästelmä, Sistem de stent coronarian cu elutie de Everolimus din alaij de platină și crom, Systém chróm-platinových koronárných stentov uvoľňujúcich everolimus, Коронарна стент система от сплава на платина и хром с елюване на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus, Everolimus elueeniva platinakroomist koronaarstendi süsteem, Everolimu izdaloša platina hroma koronár stenta sistema, Everolimus išskiriančio platinos ir chromo vainikinių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronamega stenta za ekuliranje everolimusa

4.00mm
x32mm

Contents (1)

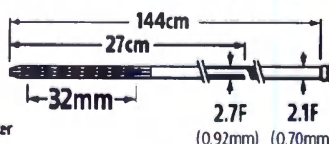

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥5F (0.056in/1.42mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.00mm Stent I.D. Stent O.D.	
8 - 814	3.64	3.83
9 - 910	3.76	3.95
10 - 1014	3.87	4.06
11 - 1117	NOMINAL	3.98 4.17
12 - 1213		4.07 4.26
13 - 1317		4.15 4.34
14 - 1420		4.21 4.40
15 - 1517		4.27 4.46
16 - 1620	RATED*	4.32 4.51
17 - 1724		4.37 4.56
18 - 1827		4.41 4.60
19 - 1924		4.47 4.66
20 - 2027		4.53 4.72

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code



51294155-01

2000-09-29

MD

STERILE EO

IFU-bst.com



CAS No. 7440-88-4



Protect from Humidity



30°C - 25°C Store at 25°C (77°F); excursions permitted to 15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 32mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 32mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.00mm x 32mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarstentsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerend coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarstentsystem, Σύστημα στεφανιαίου stent πλατινίου-χρυσίου εκκλύοντος everolimus, Sistema de Stent Coronário de Cromo e Platina com Eluição de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarstentsystem i platina-krom, Everolimus-kibocsáló platina-krom szívkoszorúér-sztentrendszer, System chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wienkowego ze stopu platyny i chromu uwalniający everolimus, Everolimus-avgivende koronarstentsystem av platinakrom, Everolimus Salinimli Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapautava platinakrominen sepevaltimostenttijärjestelmä, Sistem de stent coronarian cu elutie de Everolimus din aliaj de platină si crom, Systém chróm-platinových koronárných stentov uvoľňujúcich everolimus, Коронарна стент система от сплава на платина и хром с вытравом на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlučuje everolimus, Everolimus elueeniva platinakromi koronarstendi süsteem, Everolimu idaloša platina hroma koronár stenta sistema, Everolimus išskiriančio platinos ir chromo vaikinikų arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za eluiranje everolimusa

4.50mm
x32mm



(1)

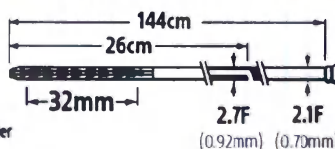

ID 6.00mm
Maximum Stent Inner Diameter

GW ≤0.014in (0.36mm)
Recommended Guidewire

GC ≥6F (0.070in/1.78mm)
Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa Pressure	4.50mm Stent I.D.	Stent O.D.
8 - 814	4.13	4.32
9 - 910	4.26	4.45
10 - 1014	4.37	4.54
11 - 1117	NOMINAL	4.49 4.68
12 - 1213		4.59 4.78
13 - 1317		4.67 4.86
14 - 1420		4.75 4.94
15 - 1517		4.80 4.99
16 - 1620	RATED*	4.87 5.06
17 - 1724		4.92 5.11
18 - 1827		4.97 5.16
19 - 1924		5.04 5.23
20 - 2027		5.10 5.29

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Internal BSC Bar Code

51294155-01

2000-09-29

MD

STERILE EO

IFU-bcsd.com



CAS No. 7440-48-4



Protect from
Humidity



30°C
15°C
Store at 25°C (77°F);
excursions permitted to
15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 32mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 32mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
4.50mm x 32mm
REF H7490000000000

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Veststraat 6, 6468 EX Kerkrade, The Netherlands

Boston
Scientific

SYNERGY MEGATRON™

MONORAIL™


Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System

Sistema de stent coronario de platino-cromo con liberación de everolimus, Système de stent coronaire en alliage platine-chrome à élution d'everolimus, Everolimus-abgebendes Platin-Chrom-Koronarsystem, Sistema di stent coronario in platino-cromo a rilascio di everolimus, Everolimus eluerende coronaire-stentsysteem van platina-chroom, Everolimus-eluerende platin-krom koronarsstentsysteem, Στοιχιο απόφραξιου stent ηAktivac: xypouoiou ékluouq, everolimus, Sistema de Stent Coronário de Cromio e Platina com Elução de Everolimus, Everolimus-eluerende koronarsstentsysteem i platina-krom, Everolimus-kibocsátó platina-krom szivkoszorúér-stentrendszer, Systém chrom-platinového koronárního stentu uvolňujícího everolimus, System stentu wienkowego ze stopu platyny i chromu uwalnijający everolimus, Everolimus-avgivnde koronarsstentsystem av platinakrom, Everolimus Salimmi Platin Krom Koroner Stent Sistemi, Everolimusia vapauttava platinakrominen sepehällimistöntijärjestelmä, Sistem de stent coronarian cu elutie de Everolimus din alai de platină și crom, Systém chróm-platinových koronárných stentov uvoľňujúcich everolimus, Коронарна стент окресна от циннаа и хром с елування на everolimus, Sustav koronarnog stenta od platine i kroma koji izlucuje everolimus, Everolimus elueeriva platinakromist koronarsstendi süsteem, Everolimu izdaloša platin hroma koronara stenta sistema, Everolimus išštrindlo platinos ir chromo vainitinių arterijų stento sistema, Platinasto-kromasti sistem koronarnega stenta za elukanje everolimusa

5.00mm
x32mm



Contents (1)

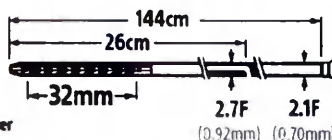

6.00mm

Maximum Stent Inner Diameter



≤0.014in (0.36mm)

R

Recommended Guidewire



≥6F (0.070in/1.78mm)

R

Recommended Guide Catheter

GTIN

00000000000000

REF

H7490000000000

LOT

12345678



2000-09-30

atm - kPa	Pressure	5.00mm Stent I.D.	Stent O.D.
8 - 814		4.59	4.78
9 - 910		4.73	4.92
10 - 1014		4.86	5.05
11 - 1117	NOMINAL	4.97	5.16
12 - 1213		5.07	5.26
13 - 1317		5.16	5.35
14 - 1420		5.24	5.43
15 - 1517		5.30	5.49
16 - 1620	RATED*	5.36	5.55
17 - 1724		5.42	5.61
18 - 1827		5.47	5.66
19 - 1924		5.52	5.71
20 - 2027		5.57	5.76

*Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED



2000-09-29

MD

STERILE EO

IFU-bcd.com



CNS No. 7440-48-4



Protect from Humidity



30°C - 25°C - 15°C
Store at 25°C (77°F); excursions permitted to 15°C - 30°C (59°F - 86°F)

CE 0344

Made in IRELAND
Ballybrit Business Park
Galway, IRELAND

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 32mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 32mm
REF H7490000000000

Boston Scientific
SYNERGY MEGATRON™
5.00mm x 32mm
REF H7490000000000
2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000

(01)08714729985259
(17)000930(10)12345678

2000-09-30
LOT 12345678
GTIN 00000000000000



(01)08714729985259(17)000930(10)12345678

EU Importer: Boston Scientific International B.V., Vestastraat 6, 6468 EX
Kerkrade, The Netherlands

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
94 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 8 мм, диаметр стента 2,25 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 8 мм, диаметр стента 2,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 8 мм, диаметр стента 2,75 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 8 мм, диаметр стента 3,00 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 8 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 8 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 12 мм, диаметр стента 2,25 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 12 мм, диаметр стента 2,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 12 мм, диаметр стента 2,75 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@ooorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 12 мм, диаметр стента 3,00 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@ooorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 12 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 12 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 12 мм, диаметр стента 4,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 12 мм, диаметр стента 5,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 16 мм, диаметр стента 2,25 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 16 мм, диаметр стента 2,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 16 мм, диаметр стента 2,75 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 16 мм, диаметр стента 3,00 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 16 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 16 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 16 мм, диаметр стента 4,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 16 мм, диаметр стента 5,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 20 мм, диаметр стента 2,25 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 20 мм, диаметр стента 2,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 20 мм, диаметр стента 2,75 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 20 мм, диаметр стента 3,00 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 20 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorg.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 20 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorg.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 20 мм, диаметр стента 4,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@ooorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 20 мм, диаметр стента 5,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@ooorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 24 мм, диаметр стента 2,25 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 24 мм, диаметр стента 2,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 24 мм, диаметр стента 2,75 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@ooorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 24 мм, диаметр стента 3,00 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@ooorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 24 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 24 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 24 мм, диаметр стента 4,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@ooorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 24 мм, диаметр стента 5,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@ooorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 28 мм, диаметр стента 2,25 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 28 мм, диаметр стента 2,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 28 мм, диаметр стента 2,75 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 28 мм, диаметр стента 3,00 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 28 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 28 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 28 мм, диаметр стента 4,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 28 мм, диаметр стента 5,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 32 мм, диаметр стента 2,25 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 32 мм, диаметр стента 2,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 32 мм, диаметр стента 2,75 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorg.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 32 мм, диаметр стента 3,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorg.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 32 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 32 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 32 мм, диаметр стента 4,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 32 мм, диаметр стента 5,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 38 мм, диаметр стента 2,25 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 38 мм, диаметр стента 2,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 38 мм, диаметр стента 2,75 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 38 мм, диаметр стента 3,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocr.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 38 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 38 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 48 мм, диаметр стента 2,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 48 мм, диаметр стента 2,75 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 48 мм, диаметр стента 3,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 48 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy XD с лекарственным покрытием: длина стента 48 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 8 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 8 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 8 мм, диаметр стента 4,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 8 мм, диаметр стента 5,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 12 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 12 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocrc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 12 мм, диаметр стента 4,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oocrc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 12 мм, диаметр стента 5,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 16 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 16 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 16 мм, диаметр стента 4,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 16 мм, диаметр стента 5,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@ooorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 20 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,6F (0,89 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@ooorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 20 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 20 мм, диаметр стента 4,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 20 мм, диаметр стента 5,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 24 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 24 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 24 мм, диаметр стента 4,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 24 мм, диаметр стента 5,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 28 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»
Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49
Тел: 8 (495) 633-70-63
Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет. Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 28 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 28 мм, диаметр стента 4,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 28 мм, диаметр стента 5,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 32 мм, диаметр стента 3,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 32 мм, диаметр стента 4,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 32 мм, диаметр стента 4,50 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Система коронарного стента Synergy Megatron с лекарственным покрытием: длина стента 32 мм, диаметр стента 5,00 мм, диаметр катетера 2,7F (0,92 мм), эффективная длина катетера 144 см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2021/15091

От:



только для одноразового использования

Нетоксично

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Регистрационная компания»

Адрес: 119334, г. Москва, проезд Донской 5-й, д. 15, этаж 3, помещение III, комната 49

Тел: 8 (495) 633-70-63

Email: elizaveta@oorc.ru

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

ПРОШЕТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
48 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.

