

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会
中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

中国国际贸易促进委员会 中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce



证明书 CERTIFICATE



号码 No. 244403A0/026672

兹证明：在所附文件上的深圳市顺美医疗股份有限公司的印章属实。



THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of SHUNMEI MEDICAL CO.,LTD on the annexed DOCUMENT is genuine.



China Council for the Promotion
of International Trade

授权签字:

Authorized
Signature:

Hu Na

日期: 2024年05月29日
(Date: May. 29, 2024)

证明网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Согласовано/APPROV

Shunmei Medical Co., Ltd
Организация/Organization

3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong
Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District,
518116 Shenzhen, Guangdong, China
Адрес/Address

General Manager
Должность/Occupation

Tu Zhenjin
Фамилия, Имя/ Surname, Name

27.05.2024
Дата ДД.ММ.ГГГГ/Date DD.MM.YYYY

Подпись/Signature



**Инструкция по применению на медицинское изделие:
«Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для
чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов в вариантах
исполнения»**

**Instruction for use
«Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei in variations»**

2024

RUS	ENG
Наименование медицинского изделия	Name of the medical device
I. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов в вариантах исполнения	I. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei in variations
1. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 2. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 3. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 4. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 5. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 6. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	1. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 20 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 2. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 20 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 3. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 20 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 4. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 80 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 5. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 80 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 6. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 80 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 7. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 100 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 8. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 100 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

7. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

8. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

9. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

10. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

11. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

12. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

13. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

14. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

9. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 100 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

10. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 120 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

11. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 120 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

12. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 120 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

13. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 150 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

14. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 150 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

15. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 150 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

16. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 200 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

17. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 200 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

18. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 200 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

15. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 16. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 17. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 18. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 19. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 20. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 21. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 22. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	19. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 20 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 20. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 20 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 21. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 20 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 22. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 80 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 23. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 80 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 24. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 80 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 25. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 100 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 26. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 100 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 27. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 100 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 28. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 120 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
--	--

23. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 24. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 25. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 26. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 27. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 28. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 29. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 30. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	29. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 120 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 30. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 120 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 31. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 150 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 32. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 150 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 33. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 150 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 34. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 200 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 35. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 200 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 36. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 200 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 37. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 20 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 38. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 20 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
--	--

31. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 32. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 33. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 34. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 35. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 36. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 37. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 38. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	39. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 20 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 40. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 30 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 41. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 30 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 42. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 30 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 43. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 40 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 44. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 40 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 45. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 40 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 46. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 60 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 47. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 60 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 48. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 60 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
---	---

39. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	49. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 80 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
40. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 30 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	50. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 80 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
41. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 30 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	51. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 80 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
42. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 30 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	52. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 100 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
43. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 40 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	53. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 100 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
44. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 40 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	54. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 100 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
45. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 40 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	55. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 120 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
46. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 60 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	56. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 120 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
	57. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 120 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
	58. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 150 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

47. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 60 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 48. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 60 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 49. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 50. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 51. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 52. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 53. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 54. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	59. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 150 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 60. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 150 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 61. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 200 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 62. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 200 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 63. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 200 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 64. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 250 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 65. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 250 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 66. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 250 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 67. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 300 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 68. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 300 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
---	--

55. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

56. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

57. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

58. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

59. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

60. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

61. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

62. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

69. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 300 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

70. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 20 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

71. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 20 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

72. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 20 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

73. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 30 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

74. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 30 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

75. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 30 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

76. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 40 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

77. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 40 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

78. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 40 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

63. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 64. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 250 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 65. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 250 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 66. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 250 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 67. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 300 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 68. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 300 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 69. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 70. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	79. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 60 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 80. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 60 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 81. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 60 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 82. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 80 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 83. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 80 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 84. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 80 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 85. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 100 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 86. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 100 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 87. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 100 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 88. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 120 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
---	--

71. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	89. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 120 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
72. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	90. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 120 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
73. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	91. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 150 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
74. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 30 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	92. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 150 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
75. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 30 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	93. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 150 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
76. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 30 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	94. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 200 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
77. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 40 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	95. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 200 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
78. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 40 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	96. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 200 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
79. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 40 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	97. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 250 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
	98. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 250 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

- | | |
|---|--|
| <p>79. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 60 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;</p> <p>80. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 60 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;</p> <p>81. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 60 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;</p> <p>82. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;</p> <p>83. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;</p> <p>84. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;</p> <p>85. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;</p> <p>86. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;</p> | <p>99. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 250 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;</p> <p>100. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 300 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;</p> <p>101. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 300 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;</p> <p>102. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 300 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;</p> <p>103. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 20 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;</p> <p>104. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 20 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;</p> <p>105. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 20 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;</p> <p>106. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 30 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;</p> <p>107. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 30 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;</p> <p>108. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 30 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;</p> |
|---|--|

87. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	109. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 40 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
88. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	110. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 40 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
89. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	111. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 40 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
90. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	112. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 60 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
91. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	113. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 60 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
92. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	114. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 60 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
93. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	115. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 80 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
94. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	116. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 80 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
	117. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 80 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
	118. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 100 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

95. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 96. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 97. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 250 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 98. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 250 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 99. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 250 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 100. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 300 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 101. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 300 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 102. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	119. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 100 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 120. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 100 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 121. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 120 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 122. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 120 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 123. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 120 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 124. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 150 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 125. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 150 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 126. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 150 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 127. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 200 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 128. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 200 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
---	--

103. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

104. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

105. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

106. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 30 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

107. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 30 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

108. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 30 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

109. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 40 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

110. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 40 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

129. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 200 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

130. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 250 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

131. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 250 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

132. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 250 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

133. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 300 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

134. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 300 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

135. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 300 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

136. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 20 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

137. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 20 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

138. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 20 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

111. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 40 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 112. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 60 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 113. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 60 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 114. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 60 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 115. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 116. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 117. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 118. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	139. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 30 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 140. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 30 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 141. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 30 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 142. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 40 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 143. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 40 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 144. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 40 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 145. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 60 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 146. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 60 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 147. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 60 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 148. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 80 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
---	--

119. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

120. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

121. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

122. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

123. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

124. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

125. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

126. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

149. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 80 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

150. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 80 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

151. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 100 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

152. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 100 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

153. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 100 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

154. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 120 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

155. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 120 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

156. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 120 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

157. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 150 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

158. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 150 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

127. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм x 200 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 128. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм x 200 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 129. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм x 200 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 130. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм x 250 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 131. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм x 250 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 132. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм x 250 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 133. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм x 300 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 134. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм x 300 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	159. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm x 150 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 160. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm x 200 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 161. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm x 200 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 162. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm x 200 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 163. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm x 250 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 164. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm x 250 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 165. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm x 250 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 166. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm x 300 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 167. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm x 300 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 168. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm x 300 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
---	---

135. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	169. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 20 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
136. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	170. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 20 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
137. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	171. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 20 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
138. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	172. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 30 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
139. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 30 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	173. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 30 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
140. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 30 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	174. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 30 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
141. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 30 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	175. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 40 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
142. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 40 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	176. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 40 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
	177. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 40 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
	178. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 60 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

143. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 40 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 144. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 40 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 145. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 60 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 146. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 60 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 147. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 60 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 148. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 149. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 150. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	179. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 60 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 180. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 60 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 181. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 80 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 182. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 80 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 183. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 80 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 184. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 100 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 185. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 100 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 186. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 100 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 187. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 120 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 188. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 120 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
--	---

151. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

152. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

153. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

154. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

155. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

156. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

157. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

158. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

189. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 120 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

190. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 150 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

191. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 150 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

192. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 150 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

193. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 200 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

194. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 200 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

195. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 200 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

196. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 250 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

197. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 250 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

198. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 250 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

159. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 160. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 161. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 162. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 163. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 250 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 164. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 250 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 165. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 250 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 166. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 300 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	199. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 300 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 200. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 300 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 201. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 300 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 202. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 20 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 203. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 20 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 204. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 20 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 205. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 30 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 206. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 30 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 207. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 30 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 208. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 40 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
--	---

167. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 300 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

168. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

169. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

170. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

171. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

172. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 30 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

173. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 30 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

174. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 30 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

209. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 40 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

210. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 40 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

211. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 60 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

212. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 60 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

213. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 60 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

214. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 80 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

215. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 80 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

216. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 80 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

217. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 100 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

218. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 100 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

175. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 40 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 176. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 40 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 177. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 40 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 178. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 60 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 179. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 60 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 180. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 60 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 181. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 80 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 182. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 80 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	219. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm x 100 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 220. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm x 120 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 221. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm x 120 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 222. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm x 120 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 223. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm x 150 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 224. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm x 150 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 225. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm x 150 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 226. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm x 200 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 227. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm x 200 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 228. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm x 200 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
---	---

183. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	229. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 250 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
184. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	230. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 250 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
185. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	231. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 250 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
186. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	232. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 300 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
187. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	233. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 300 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
188. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	234. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 300 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
189. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	235. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 20 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
190. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	236. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 20 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
	237. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 20 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
	238. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 30 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

191. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 150 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 192. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 150 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 193. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 200 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 194. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 200 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 195. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 200 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 196. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 250 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 197. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 250 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 198. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 250 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	239. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm x 30 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 240. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm x 30 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 241. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm x 40 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 242. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm x 40 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 243. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm x 40 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 244. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm x 60 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 245. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm x 60 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 246. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm x 60 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 247. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm x 80 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 248. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm x 80 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
--	--

199. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 300 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	249. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 80 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
200. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 300 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	250. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 100 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
201. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	251. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 100 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
202. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	252. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 100 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
203. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	253. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 120 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
204. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	254. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 120 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
205. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 30 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	255. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 120 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
206. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 30 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	256. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 150 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
	257. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 150 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
	258. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 150 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

207. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 30 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

208. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 40 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

209. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 40 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

210. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 40 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

211. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 60 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

212. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 60 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

213. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 60 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

214. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

259. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 200 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

260. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 200 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

261. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 200 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

262. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 250 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

263. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 250 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

264. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 250 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

265. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 300 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

266. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 300 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;

267. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 300 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

268. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 20 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

215. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 216. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 217. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 218. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 219. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 220. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 221. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 222. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	269. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 20 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 270. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 20 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 271. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 30 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 272. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 30 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 273. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 30 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 274. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 40 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 275. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 40 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 276. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 40 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 277. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 60 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 278. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 60 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
--	--

223. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 224. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 225. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 226. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 227. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 228. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 229. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 250 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 230. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 250 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	279. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 60 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 280. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 80 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 281. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 80 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 282. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 80 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 283. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 100 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 284. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 100 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 285. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 100 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 286. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 120 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 287. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 120 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 288. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 120 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
---	---

231. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 250 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	289. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 150 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
232. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 300 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	290. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 150 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
233. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 300 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	291. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 150 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
234. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	292. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 200 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
235. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	293. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 200 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
236. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	294. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 200 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
237. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	295. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 250 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
238. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 30 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	296. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 250 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
	297. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 250 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
	298. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 300 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;

239. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм x 30 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 240. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм x 30 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 241. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм x 40 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 242. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм x 40 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 243. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм x 40 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 244. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм x 60 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 245. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм x 60 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 246. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм x 60 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	299. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm x 300 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 300. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm x 300 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 301. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm x 20 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 302. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm x 20 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 303. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm x 20 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 304. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm x 30 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 305. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm x 30 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 306. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm x 30 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 307. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm x 40 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 308. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm x 40 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
--	--

247. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	309. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 40 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
248. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	310. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 60 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
249. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	311. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 60 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
250. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	312. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 60 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
251. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	313. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 80 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
252. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;	314. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 80 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
253. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	315. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 80 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;
254. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;	316. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 100 mm, effective length 40 cm – 1 pc.;
	317. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 100 mm, effective length 80 cm – 1 pc.;
	318. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 100 mm, effective length 150 cm – 1 pc.;

255. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 256. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 257. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 258. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 259. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.; 260. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.; 261. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; 262. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 250 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;	319. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 120 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 320. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 120 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 321. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 120 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 322. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 150 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 323. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 150 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 324. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 150 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; 325. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 200 mm, effective length 40 cm – 1 pc.; 326. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 200 mm, effective length 80 cm – 1 pc.; 327. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 200 mm, effective length 150 cm – 1 pc.; II. Operational documentation 1. Instructions for use.
--	---

263. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 250 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;
264. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 250 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;
265. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 300 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;
266. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 300 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;
267. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;
268. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;
269. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;
270. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

271. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 30 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

272. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 30 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

273. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 30 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

274. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 40 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

275. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 40 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

276. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 40 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

277. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 60 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

278. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 60 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

279. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 60 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;
280. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;
281. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;
282. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;
283. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;
284. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;
285. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;
286. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

287. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

288. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

289. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

290. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

291. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

292. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

293. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

294. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

295. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 250 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;
296. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 250 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;
297. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 250 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;
298. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 300 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;
299. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 300 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;
300. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;
301. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;
302. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

303. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

304. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 30 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

305. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 30 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

306. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 30 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

307. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 40 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

308. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 40 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

309. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 40 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

310. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 60 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;

311. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 60 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;
312. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 60 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;
313. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;
314. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;
315. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;
316. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;
317. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;
318. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;

319. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;
320. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;
321. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;
322. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;
323. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;
324. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.;
325. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт.;
326. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см – 1 шт.;

327. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см – 1 шт.; II. Эксплуатационная документация 1. Инструкция по применению.	
Назначение медицинского изделия	Intended use of the medical device
Предназначено для баллонной дилатации с лекарственным покрытием при чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) стенотических и внутривенных рестенотических поражений в бедренной артерии и подколенной артерии.	Intended for drug-coated balloon dilatation during percutaneous transluminal angioplasty (PTA) of stenotic and in-stent restenotic lesions in the femoral artery and popliteal artery.
Показания	Indications
При необходимости проведения чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) бедренной артерии и подколенной артерии. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов используется у пациентов с заболеваниями периферических сосудов (ЗПС), вызванными сужением артерий конечностей.	If necessary, percutaneous transluminal angioplasty (PTA) of the femoral artery and popliteal artery. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter is used for patients with peripheral vascular disease (PAD), which is caused by the narrowing of the arteries in the limbs.
Противопоказания	Contraindications

• Пациенты с известной гиперчувствительностью к рапамицину (или структурно родственным соединениям). • Пациенты, которые не могут получать рекомендованную антиагрегантную и/или антикоагулянтную терапию. • Женщины, кормящие грудью, беременные или мужчины, планирующие завести детей. • Если у пациентов установлено поражение, которое препятствует полному раздуванию баллона для ангиопластики или правильному размещению системы доставки. • Коронарные артерии, почечные артерии и надаортальные/цереброваскулярные артерии. • Пациенты с известной гиперчувствительностью к вспомогательным веществам, содержащим фосфолипиды или родственные пропротеины. • Пациенты с высоким риском кровотечения • Баллонный катетер не предназначен для введения контрастного вещества.	• Patients with known hypersensitivity to rapamycin (or structurally related compounds). • Patients who cannot receive recommended antiplatelet and/or anticoagulant therapy. • Women who are breastfeeding, pregnant or men planning to have children. • If patients have a lesion that prevents the angioplasty balloon from fully inflating or the delivery system from being properly positioned. • Coronary arteries, renal arteries and supra-aortic/cerebrovascular arteries. • Patients with known hypersensitivity to excipients containing phospholipids or related proproteins. • Patients at high risk of bleeding • The balloon catheter is not intended for injection of contrast medium.
Возможные осложнения и побочные эффекты	Possible complications and side effects
Потенциальные нежелательные явления включают следующее: • Аллергическая реакция (материалы изделия, контрастное вещество, лекарственный препарат) • Артериовенозная фистула • Смерть • Гематома/Кровотечение • Гипотония/гипертония • Инфекция/сепсис • Псевдоаневризма • Тромбоэмболические эпизоды • Сосудистый тромбоз • Травма сосуда (например, расслоение, перфорация, разрыв) • Окклюзия сосудов • Спазм сосудов	Potential adverse events include the following: • Allergic reaction (product materials, contrast agent, medication) • Arteriovenous fistula • Death • Hematoma • Hemorrhage/Bleeding • Hypotension/hypertension • Infection/sepsis • Pseudoaneurysm • Thromboembolic episodes • Vascular thrombosis • Vessel trauma (eg, dissection, perforation, rupture) • Vascular occlusion • Vasospasm

• Аллергическая/иммунная реакция на препарат (рапамицин или структурно родственные соединения) или на покрытие или его отдельные компоненты. • Алопеция • Переливание препаратов крови • Желудочно-кишечные заболевания. • Гематологические нарушения (в том числе лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения) • Изменения ферментов печени • Гистологические изменения в стенке сосуда, включая воспаление, повреждение клеток или некроз • Боли в суставах • Периферическая нейропатия • Диссекция стенки расширенной артерии • Рестеноз расширенных артерий • Полная окклюзия периферических артерий. • Эндокардит • Септицемия В случае некоторых из этих потенциальных нежелательных явлений может потребоваться дополнительное медицинское лечение.	• Allergic/immune reaction to the drug (rapamycin or structurally related compounds) or to the coating or its individual components. • Alopecia • Transfusion of blood products • Gastrointestinal diseases. • Hematological disorders (including leukopenia, neutropenia, thrombocytopenia) • Changes in liver enzymes • Histological changes in the vessel wall, including inflammation, cell damage or necrosis • Arthralgia • Peripheral neuropathy • Dissection of the dilated artery wall • Restenosis of dilated arteries • Complete occlusion of peripheral arteries. • Endocarditis • Septicemia Some of these potential adverse events may require additional medical treatment.
Сведения о производителе медицинского изделия Наименование производителя: «Шунмей Медикал Ко., Лтд», KHP (Shunmei Medical Co., Ltd) Юридический адрес производителя: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China Место производства медицинского изделия: Shunmei Medical Co., Ltd	Information about manufacturer of the medical device Name of manufacturer: Shunmei Medical Co., Ltd Legal address of manufacturer: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China Manufacturing site: Shunmei Medical Co., Ltd

Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China	Yifa 3rd road, Yifa Industrial Zone, Pingtan Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China
Условия применения	Usage conditions
- Работа в чистой, светлой, стерильной среде - Под рентгеноскопией - В операционной	- Work in a clean, bright, sterile environment - Under fluoroscopy - In the operating room
Потенциальный потребитель	Potential consumer
Это изделие должны использовать только врачи, знакомые с принципами, клиническим применением, осложнениями, побочными эффектами и рисками, обычно связанными с нативными интервенционными процедурами на поверхностной бедренной или подколенной артериями. В состав популяции в основном входят взрослые люди в возрасте от 18 лет и старше. За исключением беременных, кормящих женщин, больных раком или пациентов, проходящих химиотерапию.	This product should be used only by physicians familiar with the principles, clinical applications, complications, side effects, and risks commonly associated with native interventional procedures on the superficial femoral or popliteal artery. The populations mainly include adults, with the age 18 years and older. Except for pregnancy, breast-feeding women, patients with cancer or chemotherapy.
Требования безопасности и меры предосторожности	Warnings and precautions
Предупреждения • Это изделие стерилизуется оксидом этилена. Пожалуйста, откройте его в стерильной среде и немедленно используйте. • Это изделие является одноразовым и должно быть утилизировано после использования (на поверхности могут оставаться остатки лекарственного препарата (рапамицин), поэтому после использования его следует утилизировать надлежащим образом). Повторная стерилизация при использовании запрещена. • Не используйте это изделие для каких-либо целей, выходящих за рамки его применения. • Если упаковка изделия повреждена, изделие выглядит необычно или срок его действия истек, дальнейшее использование строго запрещено. • Перед использованием проверьте, не повреждено ли изделие, не отслоилось ли покрытие и т. д., и цел ли кончик. Если он поврежден, использовать его строго запрещено. • При применении изделия необходимо использовать соответствующий	Warnings • This product is sterilized with ethylene oxide. Please open it in a sterile environment and use it immediately. • This product is a single-use product and should be discarded after use (there may be residues of the drug (rapamycin) on the surface, so it should be disposed of properly after use). Repeated sterilization during use is prohibited. • Do not use this product for any purpose beyond its intended purpose. • If the product packaging is damaged, the product appears unusual, or the product has expired, further use is strictly prohibited. • Before use, check whether the product is damaged, whether the coating has peeled off, etc., and whether the tip is intact. If it is damaged, it is strictly prohibited to use it. • When using the product, the appropriate guiding catheter and guidewire must be used. • Do not soak or wipe the product with organic solvents such as ethanol (this may damage the product or affect its lubricity)

проводниковый катетер и проводник.

- Запрещается замачивать или протирать изделие органическими растворителями, такими как этанол (это может повредить изделие или повлиять на его смазывающую способность)
- Не продвигайте проводник быстро и не вводите его с силой, если изделие согнуто или перекручено.
- Перед началом работы ознакомьтесь с инструкциями к медицинскому изделию и лекарственному препарату, применяемым совместно.
- Никогда не используйте воздух или какую-либо газообразную среду для надувания баллона (рекомендуется смесь контрастного вещества и стерильного физиологического раствора в соотношении 50:50.), поскольку это может привести к неравномерному расширению и затруднению распространения при поражении.
- Когда баллонный катетер подвергается воздействию сосудистой системы, манипулировать им следует при качественном рентгеноскопическом наблюдении.
- Не продвигайте и не вынимайте катетер до тех пор, пока баллон не будет полностью сдут под вакуумом.
- Если во время манипуляции ощущается необычное сопротивление, определите причину сопротивления, прежде чем продолжить. Если источник сопротивления не может быть определен, рекомендуется извлечь всю систему с интродьюсером.
- Если во время надувания баллона возникли трудности, не продолжайте. Сдуйте баллон и удалите катетер.
- Чтобы снизить вероятность повреждения сосуда, диаметр надутого баллона должен приближаться к диаметру обрабатываемого сегмента сосуда. Надутая длина баллона (от плеча до плеча) может превышать длину поражения/стеноза примерно на 10 мм с каждой стороны в пределах целевой артерии.
- Не превышайте номинальное давление разрыва баллона. Для предотвращения избыточного давления рекомендуется использовать индефлятор.

- Do not advance the guidewire quickly or forcefully if the product is bent or twisted.
- Before starting work, read the instructions for the medical device and the drug used together.
- Never use air or any gaseous medium to inflate the balloon (a 50:50 mixture of contrast agent and sterile saline is recommended.) as this may cause uneven expansion and impede spread of the lesion.
- When a balloon catheter is exposed to the vasculature, it should be manipulated under good fluoroscopic observation.
- Do not advance or remove the catheter until the balloon is completely deflated under vacuum.
- If unusual resistance is felt during manipulation, determine the cause of the resistance before continuing. If the source of resistance cannot be determined, it is recommended to remove the entire sheath system.
- If you have difficulty inflating the balloon, do not continue. Deflate the balloon and remove the catheter.
- To reduce the likelihood of vessel damage, the diameter of the inflated balloon should be close to the diameter of the vessel segment being treated. The inflated length of the balloon (arm to arm) may exceed the length of the lesion/stenosis by approximately 10 mm on each side within the target artery.
- Do not exceed the rated burst pressure of the cylinder. To prevent overpressure, it is recommended to use an inflator.

Precautionary measures

- The balloon catheter should only be used by physicians experienced in performing percutaneous transluminal angioplasty.
- Use the balloon catheter before the expiration date stated on the package.
- The balloon catheter should be used with caution in procedures involving calcified lesions due to the abrasive nature of these lesions.
- The balloon catheter is not intended for administration of contrast media.
- Complete adherence of the drug-coated peripheral balloon dilatation catheter

Меры предосторожности

- Баллонный катетер должен использоваться только врачами, имеющими опыт проведения чрескожной транслюминальной ангиопластики.
- Используйте баллонный катетер до истечения срока годности, указанного на упаковке.
- Баллонный катетер следует использовать с осторожностью при процедурах, связанных с кальцинированными поражениями из-за абразивного характера этих поражений.
- Баллонный катетер не предназначен для введения контрастного вещества.
- Полное прилегание к артериальной стенке периферического катетера для баллонной дилатации, покрытого лекарственным средством, необходимо для правильного переноса лекарственного средства в сосуд.
- Перед использованием тщательно осмотрите баллонный катетер, чтобы убедиться, что он не был поврежден во время транспортировки и что его размер, форма и состояние соответствуют процедуре, для которой он будет использоваться.
- Не прикасайтесь, не вытирайте, не сгибайте и не сжимайте баллон. Перед установкой не допускайте контакта с какими-либо жидкостями, включая органические растворители, такие как спирт, или моющие средства. Возможно повреждение покрытия баллона или преждевременное высвобождение препарата.
- Чтобы свести к минимуму возможное попадание воздуха в систему, необходимо, прежде чем продолжить, уделить особое внимание поддержанию герметичности соединений катетера, а также тщательной аспирации и промывке системы.
- Никогда не продвигайте баллонный катетер без проводника, выступающего из дистального кончика.
- Это изделие не следует использовать у пациентов с неисправленными нарушениями свертываемости крови или у пациентов, которые не могут

to the arterial wall is necessary for proper transfer of the drug into the vessel.

- Before use, carefully inspect the balloon catheter to ensure that it has not been damaged during transportation and that its size, shape, and condition are appropriate for the procedure for which it will be used.
- Do not touch, wipe, bend or squeeze the canister. Before installation, do not allow contact with any liquids, including organic solvents such as alcohol, or detergents. The canister coating may be damaged or the drug may release prematurely.
- To minimize the possible introduction of air into the system, special care must be taken to maintain tight catheter connections and to thoroughly aspirate and flush the system before proceeding.
- Never advance a balloon catheter without a guidewire protruding from the distal tip.
- This product should not be used in patients with uncorrected bleeding disorders or in patients who cannot receive anticoagulant or antiplatelet therapy.
- When treating a long lesion (longer than the maximum available balloon length), each individual segment should be treated only once with a drug-coated balloon. Treat each segment with a new canister and minimize overlap of treated segments.
- When using this product, pay attention to whether it is kinked and use it carefully. If it is bent, you must stop operating the product.
- To reduce potential vascular injury, the diameter of the expanded balloon should be adapted to the diameter of the distal end of the stenotic vessel.
- Do not exceed rated burst pressure (RBP) when operating.
- While in the body, ensure that the catheter is being used in a suitable x-ray environment.
- Do not advance or retract the catheter until the balloon is completely deflated under vacuum.
- If unusual resistance is felt during manipulation, determine the cause of the resistance before continuing.

получать антикоагулянтную или антиагрегационную терапию.

- При лечении длинного поражения (длиннее максимальной доступной длины баллона) каждый отдельный сегмент следует обрабатывать только один раз с помощью баллона, покрытого лекарственным средством. Обработайте каждый сегмент новым баллоном и минимизируйте перекрытие обработанных сегментов.
- При эксплуатации этого изделия обратите внимание на то, не перегнуто ли оно, и эксплуатируйте его осторожно. Если он перегнут, необходимо прекратить работу изделия.
- Чтобы уменьшить потенциальное повреждение сосудов, диаметр расширенного баллона должен быть адаптирован к диаметру дистального конца стенозированного сосуда.
- Не превышайте номинальное разрывное давление (RBP) при работе.
- Находясь в теле, убедитесь, что катетер эксплуатируется в подходящей рентгеновской среде.
- Не продвигайте и не втягивайте катетер до тех пор, пока баллон не будет полностью сдут под вакуумом.
- Если во время манипуляции ощущается необычное сопротивление, прежде чем продолжить, определите причину сопротивления.

Общие меры предосторожности

- Устройство многократного расширения

Множественное расширение периферических баллонных катетеров, покрытых рапамицином, на людях не оценивалось.

Рекомендуется расширять баллон в течение 60 секунд при номинальном давлении за один раз или непрерывно расширять его в течение 30 секунд дважды при номинальном давлении без удаления периферического катетера для баллонной дилатации, покрытого лекарственным средством.

- Брахитерапия

Безопасность и эффективность периферического баллонного дилатационного катетера, покрытого рапамицином, при лечении

General precautions

- Multiple expansion device

Multiple expansion of rapamycin-coated peripheral balloon catheters has not been evaluated in humans.

It is recommended to expand the balloon for 60 seconds at rated pressure one time or continuously expand it for 30 seconds twice at rated pressure without removing the drug-coated peripheral balloon dilatation catheter.

- Brachytherapy

The safety and effectiveness of a rapamycin-coated peripheral balloon dilatation catheter in patients previously treated with brachytherapy have not been determined. Peripheral rapamycin-coated balloon dilatation catheter and vascular brachytherapy altered arterial biology, and the combined vascular response of these two treatments has not yet been established.

- Potential for immunosuppression.

The active ingredient in rapamycin-coated balloon dilation catheter is an immunosuppressant and can also be used in oral form.

However, when patients are treated multiple times with a drug-coated peripheral balloon dilatation catheter, systemic concentrations of rapamycin may immediately reach immunosuppressive levels, especially when they have liver dysfunction or are taking a CYP3A4 or P-glycoprotein inhibitor. These patients should consider this option, especially if they are also taking oral rapamycin, other immunosuppressants, or have other immunosuppressive risks.

- Precautions during processing

Particular care must be taken not to disturb or destroy the cylinder coating in any way. When the catheter is removed from its packaging, the following steps must be performed: place it on the guidewire and rotate the hemostatic valve and catheter guide sleeve through the large hole. Attempting to fold the canister may result in damage, contamination, or fragmentation of the cover.

- Precautions when expanding a rapamycin-coated balloon.

The vessels should first be dilated using a balloon catheter of the appropriate size.

пациентов, ранее проходивших брахитерапию, не были определены. Периферический баллонный дилатационный катетер, покрытый рапамицином, и сосудистая брахитерапия изменили биологическое состояние артерий, и комбинированный сосудистый ответ этих двух методов лечения еще не установлен.

- Потенциал иммуносупрессии.

Активный ингредиент баллонного дилатационного катетера, покрытого рапамицином, является иммунодепрессантом и может также использоваться в пероральной форме.

Однако, когда пациентов много раз лечили периферическим баллонным дилатационным катетером, покрытым лекарственным средством, системные концентрации рапамицина могут мгновенно достичь уровня иммуносупрессии, особенно когда они страдают дисфункцией печени или принимают ингибирующий СУР3А4 или Р-гликопротеин. Таким пациентам следует рассмотреть такую возможность, особенно если они также принимают рапамицин перорально, другие иммунодепрессанты или имеют другие иммуносупрессивные риски.

- Меры предосторожности во время обработки

Необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не трогать и не разрушать покрытие баллона каким-либо образом. Когда катетер вынут из упаковки, необходимо выполнить следующие действия: поместить его на проводник и повернуть гемостатический клапан и направляющую втулку катетера через большое отверстие. Попытка сложить баллон может привести к повреждению, загрязнению или фрагментации покрытия.

- Меры предосторожности при расширении баллона, покрытого рапамицином.

Сосуды следует предварительно расширить с помощью баллонного катетера соответствующего размера.

Не подготавливайте и не расширяйте баллон, а также не используйте технику продувки баллона перед лечением, за исключением случаев, когда это указано.

Do not prepare or expand the balloon or use balloon deflation techniques before treatment unless directed to do so.

The lumen size of the guide catheter should be sufficient to place the balloon in the affected area. Incorrect size may damage the cylinder cover.

A balloon that exceeds the nominal sternal pressure (RBP) may cause rupture of the target lesion and may result in procedures requiring surgical repair. Inflationary pressure must always be maintained below the NPB.

Balloon expansion at the site of a stenotic lesion can result in distal/proximal vessel dissection and acute vessel closure.

If the balloon is not positioned correctly on the target lesion, do not expand the balloon.

Balloon dilatation can damage the lateral tributaries, so special care should be taken when performing balloon dilatation.

The inflation pressure of the cylinder must be constantly monitored and must not exceed the rated burst pressure stated on the label. Applying more pressure than indicated on the product label may result in balloon rupture and intimal damage and tearing.

Do not attempt to pull a partially dilated or already dilated balloon back through the guide catheter, otherwise this may seriously damage the intimal layer of the vessel. The device could not be removed until it was completely deflated through the catheter. Be sure to use the correct method to remove the peripheral drug-eluting balloon catheter, otherwise it may cause injury at the insertion site and cause bleeding, hematoma or pseudoaneurysm, etc.

To ensure that the length of the therapeutic drug balloon is greater than or equal to the length of the lesion, use a specification model with a balloon length greater than 2 mm greater than the lesion area to ensure complete coverage.

- Precautions when removing a peripheral drug balloon dilatation catheter

If any abnormal resistance is felt at any time during entry into the lesion or removal of the balloon, the entire system should be removed.

When removing the system, push the guide wire as far as possible. Tighten the rotary hemostatic valve, secure the rapamycin-coated balloon with the guide

Размер просвета направляющего катетера должен быть достаточным для размещения баллона в области поражения. Неправильный размер может привести к повреждению покрытия баллона.

Баллон, давление которого превышает номинальное давление грудины (RBP), может привести к разрыву целевого поражения и может привести к процедурам, требующим хирургического лечения. Инфляционное давление всегда должно поддерживаться ниже НПБ.

Расширение баллона в месте стенотического поражения может привести к дистальной/проксимальной диссекции сосудов и острому закрытию сосуда.

Если баллон неправильно расположен на целевом повреждении, не расширяйте баллон.

Баллонная дилатация может повредить боковые притоки, поэтому при выполнении баллонной дилатации следует проявлять особую осторожность.

Давление надувания баллона должно постоянно контролироваться и не должно превышать номинальное давление разрыва, указанное на этикетке. Применение давления, превышающего указанное на этикетке изделия, может привести к разрыву баллона, а также к повреждению и разрыву интимы.

Не пытайтесь вытащить частично расширенный или уже расширенный баллон обратно через направляющий катетер, иначе это может серьезно повредить интимальный слой сосуда. Устройство нельзя было извлечь до тех пор, пока оно полностью не выкачается через катетер. Обязательно используйте правильный метод извлечения периферического баллонного катетера с лекарственным покрытием, в противном случае это может привести к травме в месте введения и вызвать кровотечение, гематому или псевдоаневризму и т. д.

Чтобы гарантировать, что длина баллона с терапевтическим лекарством больше или равна длине поражения, используйте модель спецификации с длиной баллона более чем на 2 мм больше площади поражения, чтобы обеспечить полное покрытие.

catheter, and remove the balloon catheter system and guide catheter as separate components.

Failure to follow this procedure or use of excessive force during extraction may result in anatomical damage and other vascular complications.

If necessary, save the guidewire for later insertion into the arterial lesion and remove all other system components.

• Precautions after treatment

Use caution when removing a rapamycin-coated balloon catheter after treatment. Postoperative dual antiplatelet therapy (DAPT) is recommended for at least 3 months. Aspirin is given along with clopidogrel or ticlopidine and then continued indefinitely to reduce the risk of thrombosis. Patients who require early cessation of antiplatelet therapy (eg, due to active bleeding) should be closely monitored for cardiovascular disease.

At the discretion of the patient's treating physician, antiplatelet therapy should be resumed as soon as possible.

PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE PRECAUTIONS

Before surgery, adjuvant therapy with clopidogrel or ticlopidine plus aspirin is recommended for 3 months, with clopidogrel therapy extended to 12 months if the risk of bleeding is low. The combined use of aspirin with clopidogrel or ticlopidine is called "dual antiplatelet therapy." Because this drug contains the active drug Rapamycin, the patient must follow recommendations for dual antiplatelet therapy after surgery. Stopping the drug early may increase the risk of thrombosis, myocardial infarction, or death.

Before performing percutaneous transluminal angioplasty (PTA), if the patient is expected to require dental or surgical procedures (antiplatelet therapy should be discontinued early), appropriate surgical specialists, physicians, and patients should carefully consider percutaneous transluminal angioplasty (PTA).) with a peripheral medicated balloon dilatation catheter followed by recommended antiplatelet therapy. The optimal duration of dual antiplatelet therapy, especially clopidogrel, is unknown, and thrombosis may still occur even if treatment is continued. For patients at low risk of bleeding, it is recommended to continue treatment for 3 to 12 months.

• Меры предосторожности при извлечении периферического катетера для баллонной дилатации с лекарственным средством

Если в любой момент во время входа в очаг поражения или удаления баллона ощущается какое-либо аномальное сопротивление, всю систему следует удалить.

При снятии системы продвиньте направляющий провод как можно дальше. Затяните поворотный гемостатический клапан, закрепите баллон, покрытый рапамицином, с помощью направляющего катетера и снимите систему баллонного катетера и направляющий катетер как отдельные компоненты.

Несоблюдение этой процедуры или применение чрезмерной силы при извлечении может привести к анатомическим повреждениям и другим сосудистым осложнениям.

При необходимости сохраните проводник для последующего ввода в артериальное повреждение и удалите все остальные компоненты системы.

• Меры предосторожности после лечения

Будьте осторожны при удалении баллонного катетера, покрытого рапамицином, после лечения. Послеоперационная двойная антиагрегантная терапия (ДАТТ) рекомендуется в течение как минимум 3 месяцев. Аспирин назначают вместе с клопидогрелом или тиклопидином, а затем продолжают принимать его в течение неопределенного времени, чтобы снизить риск тромбоза. Пациентов, которым требуется раннее прекращение антиагрегантной терапии (например, вследствие активного кровотечения), следует тщательно наблюдать на предмет сердечно-сосудистых заболеваний.

По решению лечащего врача пациента антиагрегантную терапию следует возобновить как можно скорее.

ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЕ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед операцией рекомендуется адъювантная терапия клопидогрелом или тиклопидином вместе с аспирином в течение 3 мес с продлением

DRUG INTERACTIONS

Because the amount of rapamycin released from a peripheral drug-eluting balloon dilatation catheter is extremely limited, drug interaction studies have not been conducted specifically for the peripheral drug-eluting balloon catheter. Several drugs are known to affect the metabolism of rapamycin, and interactions with other drugs can be inferred from known metabolism. Rapamycin has been reported to be a substrate of cytochrome P450 IIIA4 (CYP3A4) and P-glycoprotein. Sirolimus is metabolized by cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) in the intestinal wall and liver and cleared from small intestinal enterocytes via P-glycoprotein (P-gp). Therefore, drugs that affect CYP3A4 and P-glycoprotein may indirectly affect the absorption and metabolism of sirolimus. If a drug is a strong inhibitor of CYP3A4 and P-gp, it may prolong the duration of action of sirolimus, whereas an inducer of CYP3A4 and P-gp may promote the in vivo metabolism of sirolimus, which in turn may shorten the duration of action of sirolimus. .

Patients taking drugs that may interact with rapamycin should consider the potential drug interaction when deciding whether to use a drug-eluting peripheral balloon dilatation catheter for treatment.

USE IN SPECIAL POPULATIONS

• Pregnancy:

This product has not been tested on pregnant or breastfeeding women or men planning to have children; effects on the developing fetus have not been studied, and risks and reproductive consequences remain unknown. The use of a drug-eluting peripheral balloon dilatation catheter is not recommended in women planning to conceive or who are pregnant.

• Lactation

Before use, careful consideration should be given to continued breastfeeding, taking into account the importance of the procedure to the mother.

• Children

The safety and effectiveness of using a peripheral drug-eluting balloon catheter in pediatric patients and patients under 18 years of age has not been

терапии клопидогрелом до 12 мес, если риск кровотечения низкий. Комбинированное применение аспирина с клопидогрелом или тиклопидином называется «двойной антиагрегантной терапией». Поскольку в состав данного препарата входит активный препарат Рапамицин, пациенту необходимо соблюдать рекомендации по двойной антиагрегантной терапии после операции. Раннее прекращение приема препарата может увеличить риск тромбоза, инфаркта миокарда или смерти.

Перед проведением чрескожной транслуминальной ангиопластики (ЧТА), если ожидается, что пациенту потребуются стоматологические или хирургические процедуры (необходимо прекратить антиагрегантную терапию на ранней стадии), соответствующие хирургические специалисты, врачи и пациенты должны тщательно рассмотреть возможность проведения чрескожной транслуминальной ангиопластики (ЧТА).) с периферическим катетером для баллонной дилатации с лекарственным средством и последующей рекомендуемой антитромбоцитарной терапией. Оптимальная продолжительность двойной антиагрегантной терапии, особенно клопидогреля, неизвестна, и тромбоз все равно может возникнуть, даже если лечение продолжится. Для пациентов с низким риском кровотечения рекомендуется продолжать лечение от 3 до 12 месяцев.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВ

Поскольку количество рапамицина, высвобождаемого из периферического баллонного дилатационного катетера с лекарственным покрытием, чрезвычайно ограничено, исследования взаимодействия лекарств специально для периферического баллонного катетера с лекарственным покрытием не проводились. Известно, что несколько препаратов влияют на метаболизм рапамицина и взаимодействие с другими препаратами можно судить по известному метаболизму. Согласно опубликованным работам, рапамицин является субстратом цитохрома P450 3A4 (CYP3A4) и P-гликопротеина. Сиролимус метаболизируется цитохромом P450 3A4 (CYP3A4) в стенке кишечника и печени и

determined.

• Use of non-peripheral arteries

The safety and effectiveness of using a drug-coated peripheral balloon dilatation catheter in the brain, carotid arteries, or peripheral vessels has not been proven.

выводится из энтероцитов тонкого кишечника через Р-гликопротеин (Р-рр). Следовательно, препараты, влияющие на СУР3А4 и Р-гликопротеин, могут косвенно влиять на всасывание и метаболизм сиролимуса. Если препарат является сильным ингибитором УР3А4 и Р-рр, он может увеличить продолжительность действия сиролимуса, тогда как индуктор СУР3А4 и Р-рр может способствовать метаболизму сиролимуса *in vivo*, что, в свою очередь, может сократить продолжительность действия сиролимуса. .

Пациентам, которые принимают препараты, которые могут взаимодействовать с рапамицином, следует учитывать потенциальное лекарственное взаимодействие при принятии решения об использовании периферического баллонного дилатационного катетера с лекарственным покрытием для лечения.

ПРИМЕНЕНИЕ В ОСОБЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ

- Беременность:

Это изделие не испытывалось на беременных или кормящих женщинах, а также на мужчинах, планирующих завести детей;

воздействие на развивающийся плод не изучалось, а риски и репродуктивные последствия остаются неизвестными. Не рекомендуется использовать периферический баллонный дилатационный катетер с лекарственным покрытием у женщин, планирующих зачатие, или беременных.

- Кормление грудью

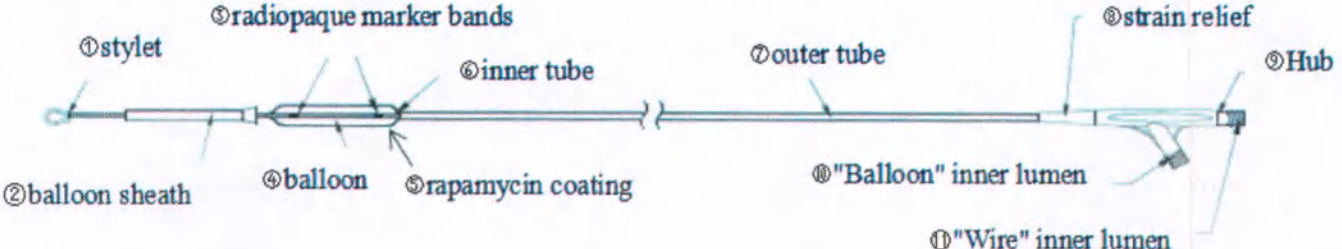
Перед применением следует тщательно рассмотреть вопрос о продолжении грудного вскармливания, принимая во внимание важность процедуры для матери.

- Дети

Безопасность и эффективность использования периферического баллонного катетера с лекарственным покрытием у педиатрических пациентов и пациентов в возрасте до 18 лет не определена.

- Использование периферических артерий

Безопасность и эффективность использования периферического

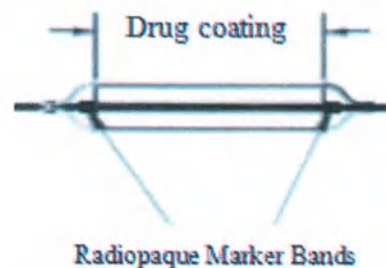
баллонного дилатационного катетера с лекарственным покрытием в головном мозге, сонных артериях или периферических сосудах не доказана.	
Описание основных функциональных элементов и составных частей (узлов) медицинского изделия	Key Functional Elements and Components (Units) Description
Катетер баллонный дилатационный для периферических сосудов с лекарственным покрытием представляет собой двухпросветный катетер с двумя отдельными внутренними просветами: Внутренний просвет проводника и внутренний просвет баллона. Внутренний просвет проводника используется для размещения проводника, а внутренний просвет баллона используется для надувания и сдувания баллона путем инъекции смеси контрастного вещества и физиологического раствора. Катетер баллонный дилатационный для периферических сосудов с лекарственным покрытием состоит из разъема, разгрузочной муфты, внешнего корпуса, внутреннего корпуса, баллона, рентгеноконтрастных маркеров, защитного чехла баллона и стилета. Он имеет два рентгеноконтрастных платиноиридиевых маркера, которые указывают положение баллона в кровеносном сосуде. Катетер совместим с проводниковыми катетерами разных размеров в зависимости от диаметра баллона. Диаметр самого большого проводника, используемого с катетером при необходимости, не более 0,018 дюйма (0,46 мм). Структурная схема представлена на Рис. 1 - Рис. 3.	The peripheral drug-eluting balloon dilatation catheter is a double-lumen catheter with two separate internal lumens: Internal lumen of the guide wire and internal lumen of the balloon. The inner lumen of the guidewire is used to place the guidewire, and the inner lumen of the balloon is used to inflate and deflate the balloon by injecting a mixture of contrast agent and saline solution. The peripheral drug-eluting balloon dilatation catheter consists of a hub, a strain relief, an outer tube, an inner tube, a balloon, radiopaque marker bands, a balloon sheath, and a stylet. It has two radiopaque platinum-iridium markers that indicate the position of the balloon in the blood vessel. The catheter is compatible with guiding catheters of different sizes depending on the diameter of the balloon. Diameter of the largest guide wire used with the catheter as needed not more than 0,018 inches (0,46 mm). The block diagram is shown in Fig. 1 - Fig. 3.
	

Stylet	Balloon sheath	Radiopaque marker bands	Balloon	Rapamycin coating	Inner tube	Outer tube	Strain relief	Hub	«Balloon» inner lumen	«Wire» inner lumen
Стилет	Защитный чехол баллона	Рентгеноконтрастные маркеры	Баллон	Лекарственное покрытие с рапамицином	Внутренний корпус	Внешний корпус	Разгрузочная муфта	Разъем	Внутренний просвет «Баллон»	Внутренний просвет «Проводник»

Примечание/Note:

Эффективная длина относится ко всему катетеру, кроме разгрузочной муфты и разъема катетера. / The effective length refers to the entire catheter except the strain relief and catheter hub.

Рисунок 1. Структурная схема изделия/Figure 1. Medical device diagram



Drug coating	Лекарственное покрытие
Radiopaque marker bands	Рентгеноконтрастные маркеры

Примечание/Note:

Расстояние между двумя рентгеноконтрастными маркерами равно длине баллона, а также длине лекарственного покрытия. / The distance between the two radiopaque markers is equal to the length of the balloon, as well as the length of the drug coating.

Рисунок 2. Структурная схема баллона/Figure 2. Balloon diagram



Hydrophilic coating

Гидрофильное покрытие

Примечание/Note:

Дистальный корпус катетера покрыт гидрофильным покрытием (за исключением баллона). / The distal catheter body is coated with a hydrophilic coating (except for the balloon).

Рисунок 3. Структурная схема гидрофильного покрытия / Figure 3. Hydrophilic coating diagram

Подготовка к использованию	Preparation for use
1. Выбор баллонного катетера с лекарственным покрытием Выберите баллонный катетер соответствующего размера, соответствующий диаметру целевой артерии. Номинальная длина баллона может превышать длину поражения/стеноза примерно на 10 мм с каждой стороны. Выберите катетер соответствующей длины с учетом расстояния между точкой доступа к артерии и местоположением целевого поражения. Внимание: при лечении длинного поражения (длиннее максимальной доступной длины баллона) каждый отдельный сегмент должен обрабатываться только один раз с помощью баллона с лекарственным средством. Обработайте каждый сегмент новым баллоном и сведите к минимуму перекрытие обработанных сегментов. 2. Проверка перед использованием Внимательно осмотрите все изделия, которые будут использоваться во время процедуры, включая баллонный катетер, чтобы убедиться в их правильном функционировании. Убедитесь, что баллонный катетер и стерильная упаковка не повреждены. Не используйте, если стерильная упаковка повреждена.	1. Peripheral Drug-coated Balloon Selection Select an appropriately sized balloon catheter for the diameter of the targeted artery. The nominal length of the balloon may exceed the length of the lesion/stenosis by approximately 10 mm on either side. Select an appropriate catheter shaft length considering the distance between the arterial access point and the location of the targeted lesion. Caution: If treating a long lesion (longer than the maximum balloon length available), each individual segment should be treated only once with a drug-coated balloon. Treat each segment with a new balloon and minimize overlapping of treated segments. 2. Inspection Prior to Use Carefully examine all device to be used during the procedure, including the balloon catheter, to verify proper function. Verify that the balloon catheter and sterile packaging have not been damaged. Do not use if sterile package is damaged. Verify that the catheter size is suitable for the specific procedure for which it is intended. Caution: Do not touch, wipe, bend, or squeeze the balloon. Do not allow it to contact any liquids including organic solvents such as alcohol or detergents

Убедитесь, что размер катетера подходит для конкретной процедуры, для которой он предназначен.

Внимание: Не прикасайтесь, не вытирайте, не сгибайте и не сжимайте баллон. Не допускайте контакта с какими-либо жидкостями, включая органические растворители, такие как спирт или моющие средства, перед установкой. Повреждение покрытия баллона или преждевременное высвобождение препарата могут возникнуть.

Примечание. Не используйте баллонный катетер, если он поврежден или нарушена стерильность.

3. Подготовка индифлятора

(1) Подготовьте индифлятор в соответствии с инструкциями производителя.

(2) Удалите воздух из системы.

4. Подготовка баллона с лекарственным покрытием

(1) Снимите защитный кожух с баллонного катетера. Будьте осторожны, чтобы не повредить катетер.

(например, перегиб стержня).

(2) Подготовьте баллонный катетер к продувке. Заполните индифлятор через Люэр вход соответствующей средой для надувания баллонного катетера. Предупреждение: никогда не используйте воздух или какую-либо газообразную среду для надувания баллона (смесь контрастного вещества и стерильных материалов в соотношении 50:50), рекомендуется физиологический раствор.

(3) Откройте манифолды баллонного катетера. Держите индифлятор соплом вниз и аспирируйте в течение 15–20 секунд. Отпустите плунжер или откройте манифолды для выхода воздуха. Будьте осторожны при подключении баллонного катетера, чтобы избежать повреждений (например, перегиба стержня).

(4) Подсоедините индифлятор к манифолдам. Убедитесь, что соединения Люэра правильно выровнены, чтобы не сорвать резьбу Люэра и не вызвать последующую утечку.

prior to insertion. Damage to the balloon coating or premature release of the drug may occur.

Note: Do not use the balloon catheter if damage occurs or sterility is compromised.

3. Inflation Device Preparation

(1) Prepare the inflation device according to the manufacturer's instructions.

(2) Purge the air of system.

4. Drug-Coated Balloon Preparation

(1) Remove the balloon catheter from the protective coil. Use care when removing the balloon catheter to avoid damage (e.g., shaft kink).

(2) Prepare the balloon catheter for purging. Fill a luer-lock inflation device with appropriate balloon catheter inflation medium.

Warning: Never use air or any gaseous medium to inflate the balloon (a 50:50 mixture of contrast medium and sterile saline is recommended).

(3) Connect a manifolds to the inflation port fitting on the balloon catheter. Close the manifolds to the balloon catheter and flush through the manifolds. Use care when connecting the balloon catheter to avoid damage (e.g., shaft kink).

(4) Connect the inflation device to the manifolds. Assure luer connections are properly aligned to avoid stripping the luer thread and causing subsequent leakage.

(5) Open the manifolds to the balloon catheter. Hold the inflation device with the nozzle pointing downward and aspirate for 15 seconds to 20 seconds. Release the plunger or open the manifolds to air.

(6) Remove the inflation device and evacuate all air from the barrel.

(7) To prevent the possibility of air embolization, reconnect the inflation device and aspirate for 15 seconds to 20 seconds until bubbles no longer appear. If bubbles persist, check the luer connections. Discard and replace the balloon catheter if the problem cannot be resolved.

(8) Disconnect the inflation device used in preparation. To remove any air lodged in the distal luer fitting of the inflation device, purge approximately 1 ml of contrast medium while pointing the inflation device upwards.

(5) Откройте манифолды баллонного катетера. Держите индефлятор соплом вниз и аспирируйте в течение 15–20 секунд. Отпустите плунжер или откройте манифолды для продувания. (6) Снимите индефлятор и удалите весь воздух из шприца. (7) Чтобы предотвратить возможность воздушной эмболии, повторно подсоедините индефлятор и аспирируйте в течение 15-20 секунд пока пузырьки не перестанут появляться. Если пузырьки сохраняются, проверьте соединения Люэра. Выбросьте и замените баллонный катетер, если проблема не может быть решена. (8) Отсоедините индефлятор, использованное при подготовке. Чтобы удалить воздух, застрявший в дистальном люэровском фитинге индефлятора, удалите примерно 1 мл контрастного вещества, направляя индефлятор вверх. (9) Убедитесь, что контрастное вещество присутствует как в порте для накачивания, так и в соединении устройства для надувания, чтобы обеспечить соединение жидкости с жидкостью. Может потребоваться добавление капли инфляционной среды в порт. Надежно соедините индефлятор к порту индефлятора. (10) Откройте манифолды баллонного катетера и поддерживайте нейтральное давление. (11) Направив кончик катетера вниз, промойте просвет проводника баллонного катетера стерильным физиологическим раствором. Проверьте на наличие изгибов, перегибов и других повреждений. Не используйте, если обнаружены какие-либо дефекты.	(9) Verify that contrast medium is evident in both the inflation port and the inflation device connection to ensure a fluid-to-fluid connection. Adding a drop of inflation medium to the port may be necessary. Securely couple the inflation device to the inflation port. (10) Open the manifolds to the balloon catheter and maintain neutral pressure. (11) With the tip of the catheter pointed down, flush the guidewire lumen of the balloon catheter with sterile saline. Check for bends, kinks and other damage. Do not use if any defects are noted.
Способ применения 5. Порядок доставки Примечание. Рекомендуется всегда использовать баллонный дилатационный катетер меньшего диаметра, чтобы предварительно расширить стеноз и облегчить прохождение баллонного катетера, покрытого лекарственным средством. (1) Продвижение катетера	Mode of application 5. Delivery Procedure Note: It is recommended to always use a smaller diameter balloon dilatation catheter to pre-dilate the stenosis to facilitate passage of the drug-coated balloon catheter. (1) Catheter Advancement a) Access and cross the stenosis with a guidewire using standard practice and/or device(s) manufacturer's instructions.

а) Получите доступ к стенозу и пересеките его с помощью проводника, используя стандартную практику и/или инструкции производителя изделий(я).

б) Тщательно аспирируйте и промойте интродьюсер при подготовке к введению баллонного катетера.

в) Снимите оболочку баллона и стилет и не прикасайтесь к лекарствам на поверхности баллона во время процесса.

Наденьте дистальный конец баллонного катетера на проводник, убедившись, что проводник выходит из проводникового порта манифолодов катетера.

Примечание. Во избежание перекручивания продвигайте катетер медленно, небольшими шагами, пока проксимальный конец проводника не выйдет из катетера.

г) Осторожно продвиньте баллонный катетер к проводнику или интродьюсеру.

Предостережение: Если кончик баллонного катетера не войдет в клапан оболочки проводника/интродьюсера, применение силы к баллонному катетеру может привести к перекручиванию стержня катетера и повреждению лекарственного покрытия при продвижении катетера. Рассмотрите возможность замены интродьюсера.

д) Медленно продвигайте катетер через интродьюсер, нажимая на стержень катетера дистально, без вращения, пока баллон не пройдет через гемостатический клапан.

Внимание: если при продвижении катетера через клапан ощущается необычное сопротивление, не используйте баллонный катетер.

Замените новым катетером для баллонной дилатации с лекарственным покрытием.

Внимание: Будьте осторожны и не затягивайте гемостатический клапан вокруг стержня катетера слишком сильно, поскольку это может привести к сужению просвета, что повлияет на надувание/сдувание баллона или повредит лекарственное покрытие.

b) Thoroughly aspirate and flush the introducer sheath in preparation for introduction of the balloon catheter.

c) Take off the balloon Sheath and stylet, and avoid touching the drugs on the balloon surface during the process.

Backload the distal tip of the balloon catheter onto the guidewire ensuring that the guidewire exits the wire port of the catheter manifolds.

Note: To avoid kinking, advance the catheter slowly, in small increments, until the proximal end of the guidewire emerges from the catheter.

d) Carefully advance the balloon catheter to the guide or introducer sheath.

Caution: If balloon catheter tip will not enter the guide/introducer sheath valve, forcing the balloon catheter can cause catheter shaft kinking and damage to drug coating when advancing the catheter. Consider replacing introducer sheath.

e) Slowly advance the catheter through the introducer sheath by pushing the catheter shaft distally, without rotation, until the balloon is past the hemostasis valve.

Caution: If unusual resistance is felt during catheter advancement through the valve, do not use the balloon catheter.

Replace with a new Drug-coated Balloon Dilatation Catheter.

Caution: Take care not to over-tighten the hemostasis valve around the catheter shaft as lumen constriction may occur, affecting inflation/ deflation of the balloon or damaging the drug coating.

f) Advance the balloon catheter over the guidewire under direct fluoroscopic visualization and position the balloon relative to the lesion to be treated. Use the radiopaque marker bands as a reference point. The outside edges of the marker bands indicate the balloon shoulders. Balloon inflation should not be undertaken if the balloon is not properly positioned within the stenosis.

(2) Balloon Inflation

a) Slowly inflate the balloon to the appropriate pressure. Fluoroscopic visualization during balloon expansion should be used to properly judge the optimum expanded balloon diameter as compared to the distal vessel diameter. The recommended balloon inflation time is 15 seconds.

е) Продвиньте баллонный катетер по проводнику под прямой рентгеноскопической визуализацией и расположите баллон относительно очага поражения, подлежащего лечению. Используйте рентгеноконтрастные маркеры в качестве ориентира. Внешние края маркеров обозначают плечи баллона. Не следует проводить раздувание баллона, если баллон неправильно расположен внутри стеноза.

(2) Надувание баллона

а) Медленно накачайте баллон до соответствующего давления. Рентгеноскопическую визуализацию во время расширения баллона следует использовать для правильного определения оптимального диаметра расширенного баллона по сравнению с диаметром дистального сосуда. Рекомендованное время надувания баллона составляет 15 секунд.

Предупреждение: Не превышайте номинальное давление разрыва баллона. Для предотвращения избыточного давления рекомендуется использовать индефлятор.

Предупреждение: если во время надувания баллона возникли трудности, не продолжайте. Сдуйте баллон и удалите катетер.

б) Примените отрицательное давление, чтобы полностью сдуть баллон. Подождите до 60 секунд -180 секунд для полного сдувания баллона. Подтвердите, что баллон полностью спущен при рентгеноскопии.

в) Извлекайте баллонный катетер до тех пор, пока он не выйдет из очага поражения. Поддерживайте проводник поперек стеноза.

Предупреждение: Не продвигайте и не втягивайте катетер до тех пор, пока баллон не будет полностью сдут под вакуумом.

Внимание: Полное прилегание к артериальной стенке катетера для баллонной дилатации с лекарственным покрытием необходимо для правильного переноса лекарственного средства в сосуд.

(3) Удаление катетера

а) С помощью ангиографии подтвердите, что просвет расширенного сосуда не закупорился резко. Также убедитесь, что баллон полностью сдут.

Warning: Do not exceed the balloon rated burst pressure. Use of an inflation device is recommended to prevent over-pressurization.

Warning: If difficulty is experienced during balloon inflation, do not continue. Deflate the balloon and remove the catheter.

b) Apply negative pressure to fully deflate the balloon. Allow up to 60 seconds-180 seconds for full balloon deflation. Confirm that the balloon is fully deflated under fluoroscopy.

c) Withdraw the balloon catheter until it is clear of the lesion. Maintain the guidewire across the stenosis.

Warning: Do not advance or retract the catheter unless the balloon is fully deflated under vacuum.

Caution: Full arterial wall apposition of the Drug-coated Balloon Dilatation Catheter is necessary for proper drug transfer to the vessel.

(3) Catheter Removal

a) Confirm with angiography that the lumen of the dilated vessel has not abruptly occluded. Also ensure the balloon is fully deflated.

b) While maintaining negative pressure, withdraw the deflated balloon catheter and guidewire from the guiding sheath through the hemostasis valve.

Warning: If unusual resistance is felt during manipulation, determine the cause of the resistance before proceeding. If the source of resistance cannot be determined, it is recommended to extract the entire system with the guiding sheath.

б) Поддерживая отрицательное давление, извлеките сдутый баллонный катетер и проводник из направляющего интродьюсера через гемостатический клапан. Предупреждение: если во время манипуляции ощущается необычное сопротивление, прежде чем продолжить, определите причину сопротивления. Если источник сопротивления не может быть определен, рекомендуется извлечь всю систему вместе с интродьюсером.										
Информация об очистке, дезинфекции и стерилизации медицинского изделия (для стерилизуемых изделий), порядке действий при нарушении стерильной упаковки (для изделий, поставляемых в стерильном виде)					Information on cleaning, disinfection and sterilization of a medical device (for sterilized products), the procedure in case of package appears damaged (for sterilize products)					
Газовым методом с помощью этиленоксида					Ethylene oxide					
Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия					Requirements for medical device maintenance and repair					
Неприменимо					Not applicable.					
Основные технические и функциональные характеристики					Main technical and functional characteristics					
Таблица 1. Технические характеристики / Table 1. Technical characteristics										
Наименование варианта исполнения	Variants	Диаметр баллона, мм, ±10%/ Balloon diameter, mm, ±10%	Эффективная длина баллона, мм, ±10%/ Effective balloon length, mm, ±10%	Общая доза лекарственно го средства (рассчитана на 4 мкг/мм²), мкг, ±20%/ Total drug dosage (Calculated at 4µg/mm²), µg, ±20%	Эффективная длина катетера, см, ±5%/ Effective catheter length, cm, ±5%	Диаметр центрально го просвета катетера, мм (дюйм), ± 0,0254 мм (0.001 дюйма)/ Diameter of the central lumen of the catheter, mm (inch), ± 0.0254 mm (0.001 inch)	Наружный диаметр внешнего корпуса катетера, мм (F), ±10%/ Outer diameter of the outer catheter body, mm (F), ±10%	Масса, г, ±20%/ Weight , g, ±20%	Диаметр самого большого проводника, используемог о с катетером при необходимост и, не более дюйм (мм)/ Diameter of the largest guide wire used with the catheter as needed, not	

									more than inch (mm)
1. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм x 20 мм, эффективная длина 40 см	1. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm x 20 mm, effective length 40 cm	2	20	503	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
2. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм x 20 мм, эффективная длина 80 см	2. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm x 20 mm, effective length 80 cm	2	20		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
3. Катетер баллонный дилатационный с	3. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter	2	20		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см	Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 20 mm, effective length 150 cm									
4. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см	4. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 80 mm, effective length 40 cm	2	80	2011	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
5. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики	5. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 80 mm, effective length 40 cm	2	80		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см	effective length 80 cm									
6. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см	6. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 80 mm, effective length 150 cm	2	80		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
7. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 100 мм,	7. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 100 mm, effective length 40 cm	2	100	2513	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

эффективная длина 40 см										
8. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм x 100 мм, эффективная длина 80 см	8. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm x 100 mm, effective length 80 cm	2	100		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
9. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм x 100 мм, эффективная длина 150 см	9. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm x 100 mm, effective length 150 cm	2	100		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
10. Катетер баллонный дилатационный с	10. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter	2	120	3016	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см	Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 120 mm, effective length 40 cm									
11. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см	11. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 120 mm, effective length 80 cm	2	120		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
12. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики	12. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 120 mm,	2	120		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см	effective length 150 cm									
13. Катетер баллонный с дилатационным лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см	13. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 150 mm, effective length 40 cm	2	150	3770	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
14. Катетер баллонный с дилатационным лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 150 мм,	14. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 150 mm, effective length 80 cm	2	150		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

эффективная длина 80 см										
15. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм x 150 мм, эффективная длина 150 см	15. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm x 150 mm, effective length 150 cm	2	150		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
16. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм x 200 мм, эффективная длина 40 см	16. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm x 200 mm, effective length 40 cm	2	200	5026	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
17. Катетер баллонный дилатационный с	17. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter	2	200		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см	Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 200 mm, effective length 80 cm									
18. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см	18. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 200 mm, effective length 150 cm	2	200		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
19. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики	19. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 20 mm,	2,5	20	628	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см	effective length 40 cm									
20. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см	20. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 20 mm, effective length 80 cm	2,5	20		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
21. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 20 мм,	21. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 20 mm, effective length 150 cm	2,5	20		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	



эффективная длина 150 см										
22. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслиминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см	22. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 80 mm, effective length 40 cm	2,5	80	2513	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
23. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслиминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см	23. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 80 mm, effective length 80 cm	2,5	80		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
24. Катетер баллонный дилатационный с	24. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter	2,5	80		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см	Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 80 mm, effective length 150 cm									
25. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см	25. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 100 mm, effective length 40 cm	2,5	100	3142	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
26. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики	26. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 100 mm, effective length 40 cm	2,5	100		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см	effective length 80 cm									
27. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см	27. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 100 mm, effective length 150 cm	2,5	100		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
28. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 120 мм,	28. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 120 mm, effective length 40 cm	2,5	120	3770	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

эффективная длина 40 см										
29. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм x 120 мм, эффективная длина 80 см	29. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm x 120 mm, effective length 80 cm	2,5	120		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
30. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм x 120 мм, эффективная длина 150 см	30. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm x 120 mm, effective length 150 cm	2,5	120		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
31. Катетер баллонный дилатационный с	31. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter	2,5	150	4712	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см	Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 150 mm, effective length 40 cm									
32. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см	32. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 150 mm, effective length 80 cm	2,5	150		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
33. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики	33. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 150 mm,	2,5	150		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см	effective length 150 cm									
34. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см	34. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 200 mm, effective length 40 cm	2,5	200	6283	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
35. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 200 мм,	35. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 200 mm, effective length 80 cm	2,5	200		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

эффективная длина 80 см										
36. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2,5 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см	36. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2.5 mm × 200 mm, effective length 150 cm	2,5	200		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
37. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см	37. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 20 mm, effective length 40 cm	3	20	754	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
38. Катетер баллонный дилатационный с	38. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter	3	20		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 20 мм, эффективная длина 80 см	Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 20 mm, effective length 80 cm									
39. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 20 мм, эффективная длина 150 см	39. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 20 mm, effective length 150 cm	3	20		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
40. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики	40. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 30 mm,	3	30	1131	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 30 мм, эффективная длина 40 см	effective length 40 cm									
41. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 30 мм, эффективная длина 80 см	41. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 30 mm, effective length 80 cm	3	30		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
42. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 30 мм,	42. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 30 mm, effective length 150 cm	3	30		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

эффективная длина 150 см										
43. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 40 мм, эффективная длина 40 см	43. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 40 mm, effective length 40 cm	3	40	1508	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
44. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 40 мм, эффективная длина 80 см	44. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 40 mm, effective length 80 cm	3	40		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
45. Катетер баллонный дилатационный с	45. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter	3	40		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 40 мм, эффективная длина 150 см	Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 40 mm, effective length 150 cm									
46. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 60 мм, эффективная длина 40 см	46. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 60 mm, effective length 40 cm	3	60	2262	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
47. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики	47. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 60 mm,	3	60		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 60 мм, эффективная длина 80 см	effective length 80 cm									
48. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 60 мм, эффективная длина 150 см	48. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 60 mm, effective length 150 cm	3	60		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
49. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 80 мм,	49. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 80 mm, effective length 40 cm	3	80	3016	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

эффективная длина 40 см										
50. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 80 мм, эффективная длина 80 см	50. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 80 mm, effective length 80 cm	3	80		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
51. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 80 мм, эффективная длина 150 см	51. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 80 mm, effective length 150 cm	3	80		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
52. Катетер баллонный дилатационный с	52. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter	3	100	3770	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см	Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 100 mm, effective length 40 cm									
53. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см	53. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 100 mm, effective length 80 cm	3	100		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
54. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики	54. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 100 mm, effective length 80 cm	3	100		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см	effective length 150 cm									
55. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см	55. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 120 mm, effective length 40 cm	3	120	4524	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
56. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 120 мм,	56. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 120 mm, effective length 80 cm	3	120		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

эффективная длина 80 см										
57. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 120 мм, эффективная длина 150 см	57. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 120 mm, effective length 150 cm	3	120		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
58. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 150 мм, эффективная длина 40 см	58. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 150 mm, effective length 40 cm	3	150	5655	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
59. Катетер баллонный дилатационный с	59. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter	3	150		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см	Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 150 mm, effective length 80 cm									
60. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см	60. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 150 mm, effective length 150 cm	3	150		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
61. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики	61. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 200 mm,	3	200	7540	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 200 мм, эффективная длина 40 см	effective length 40 cm									
62. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 200 мм, эффективная длина 80 см	62. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 200 mm, effective length 80 cm	3	200		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
63. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм x 200 мм,	63. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm x 200 mm, effective length 150 cm	3	200		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

эффективная длина 150 см										
64. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 250 мм, эффективная длина 40 см	64. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 250 mm, effective length 40 cm	3	250	9425	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
65. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 250 мм, эффективная длина 80 см	65. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 250 mm, effective length 80 cm	3	250		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
66. Катетер баллонный дилатационный с	66. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter	3	250		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 250 мм, эффективная длина 150 см	Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 250 mm, effective length 150 cm									
67. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 300 мм, эффективная длина 40 см	67. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 300 mm, effective length 40 cm	3	300	11309	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
68. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики	68. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 300 mm,	3	300		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 300 мм, эффективная длина 80 см	effective length 80 cm									
69. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см	69. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3 mm × 300 mm, effective length 150 cm	3	300		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
70. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 20 мм,	70. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 20 mm, effective length 40 cm	3,5	20	880	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

эффективная длина 40 см									
71. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм x 20 мм, эффективная длина 80 см	71. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm x 20 mm, effective length 80 cm	3,5	20		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
72. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм x 20 мм, эффективная длина 150 см	72. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm x 20 mm, effective length 150 cm	3,5	20		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
73. Катетер баллонный дилатационный с	73. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter	3,5	30	1319	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 30 мм, эффективная длина 40 см	Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 30 mm, effective length 40 cm										
74. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 30 мм, эффективная длина 80 см	74. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 30 mm, effective length 80 cm	3,5	30		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)		
75. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики	75. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 30 mm,	3,5	30		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)		

периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 30 мм, эффективная длина 150 см	effective length 150 cm									
76. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 40 мм, эффективная длина 40 см	76. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 40 mm, effective length 40 cm	3,5	40	1759	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
77. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 40 мм,	77. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 40 mm, effective length 80 cm	3,5	40		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

эффективная длина 80 см										
78. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм x 40 мм, эффективная длина 150 см	78. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm x 40 mm, effective length 150 cm	3,5	40		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
79. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм x 60 мм, эффективная длина 40 см	79. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm x 60 mm, effective length 40 cm	3,5	60	2639	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
80. Катетер баллонный дилатационный с	80. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter	3,5	60		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 60 мм, эффективная длина 80 см	Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 60 mm, effective length 80 cm									
81. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 60 мм, эффективная длина 150 см	81. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 60 mm, effective length 150 cm	3,5	60		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
82. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики	82. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 80 mm,	3,5	80	3518	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см	effective length 40 cm									
83. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см	83. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 80 mm, effective length 80 cm	3,5	80		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
84. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 80 мм,	84. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 80 mm, effective length 150 cm	3,5	80		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

эффективная длина 150 см										
85. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм x 100 мм, эффективная длина 40 см	85. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm x 100 mm, effective length 40 cm	3,5	100	4398	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
86. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм x 100 мм, эффективная длина 80 см	86. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm x 100 mm, effective length 80 cm	3,5	100		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
87. Катетер баллонный дилатационный с	87. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter	3,5	100		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см	Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 100 mm, effective length 150 cm									
88. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см	88. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 120 mm, effective length 40 cm	3,5	120	5278	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
89. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики	89. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 120 mm, effective length 40 cm	3,5	120		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см	effective length 80 cm									
90. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см	90. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 120 mm, effective length 150 cm	3,5	120		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
91. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 150 мм,	91. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 150 mm, effective length 40 cm	3,5	150	6597	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

эффективная длина 40 см										
92. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм x 150 мм, эффективная длина 80 см	92. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm x 150 mm, effective length 80 cm	3,5	150		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
93. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм x 150 мм, эффективная длина 150 см	93. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm x 150 mm, effective length 150 cm	3,5	150		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
94. Катетер баллонный дилатационный с	94. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter	3,5	200	8796	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см	Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 200 mm, effective length 40 cm									
95. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см	95. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 200 mm, effective length 80 cm	3,5	200		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
96. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики	96. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 200 mm,	3,5	200		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см	effective length 150 cm									
97. Катетер баллонный с дилатационным лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 250 мм, эффективная длина 40 см	97. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 250 mm, effective length 40 cm	3,5	250	10995	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
98. Катетер баллонный с дилатационным лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 250 мм,	98. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 250 mm, effective length 80 cm	3,5	250		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

эффективная длина 80 см										
99. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм x 250 мм, эффективная длина 150 см	99. Peripheral Drug- coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm x 250 mm, effective length 150 cm	3,5	250		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
100. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм x 300 мм, эффективная длина 40 см	100. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm x 300 mm, effective length 40 cm	3,5	300	13194	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
101. Катетер баллонный дилатационный с	101. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter	3,5	300		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 300 мм, эффективная длина 80 см	Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 300 mm, effective length 80 cm									
102. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 3,5 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см	102. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 3.5 mm × 300 mm, effective length 150 cm	3,5	300		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
103. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики	103. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 20 mm,	4	20	1005	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см	effective length 40 cm									
104. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см	104. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 20 mm, effective length 80 cm	4	20		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
105. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 20 мм,	105. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 20 mm, effective length 150 cm	4	20		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

эффективная длина 150 см										
106. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм x 30 мм, эффективная длина 40 см	106. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm x 30 mm, effective length 40 cm	4	30	1508	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
107. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм x 30 мм, эффективная длина 80 см	107. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm x 30 mm, effective length 80 cm	4	30		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

108. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 30 мм, эффективная длина 150 см	108. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 30 mm, effective length 150 cm	4	30		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
109. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 40 мм, эффективная длина 40 см	109. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 40 mm, effective length 40 cm	4	40	2011	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
110. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei	110. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size	4	40		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 40 мм, эффективная длина 80 см	(diameter x length) 4 mm × 40 mm, effective length 80 cm									
111. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 40 мм, эффективная длина 150 см	111. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 40 mm, effective length 150 cm	4	40		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
112. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean,	112. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 60 mm, effective length 40 cm	4	60	3016	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

размер баллона (диаметр x длина) 4 мм x 60 мм, эффективная длина 40 см									
113. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм x 60 мм, эффективная длина 80 см	113. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm x 60 mm, effective length 80 cm	4	60		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
114. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм x 60 мм, эффективная длина 150 см	114. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm x 60 mm, effective length 150 cm	4	60		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

115. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см	115. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 80 mm, effective length 40 cm	4	80	4021	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
116. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см	116. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 80 mm, effective length 80 cm	4	80		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
117. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei	117. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size	4	80		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см	(diameter x length) 4 mm × 80 mm, effective length 150 cm									
118. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см	118. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 100 mm, effective length 40 cm	4	100	5026	40	0,4953 (0,0195)	• 1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
119. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean,	119. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 100 mm, effective length 80 cm	4	100		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см										
120. Катетер баллонный с дилатационным лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см	120. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 100 mm, effective length 150 cm	4	100		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
121. Катетер баллонный с дилатационным лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см	121. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 120 mm, effective length 40 cm	4	120	6032	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

122. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см	122. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 120 mm, effective length 80 cm	4	120		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
123. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см	123. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 120 mm, effective length 150 cm	4	120		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
124. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei	124. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size	4	150	7540	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см	(diameter x length) 4 mm × 150 mm, effective length 40 cm										
125. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см	125. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 150 mm, effective length 80 cm	4	150		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)		
126. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean,	126. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 150 mm, effective length 150 cm	4	150		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)		

размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см										
127. Катетер баллонный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см	127. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 200 mm, effective length 40 cm	4	200	10053	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
128. Катетер баллонный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см	128. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 200 mm, effective length 80 cm	4	200		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

129. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см	129. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 200 mm, effective length 150 cm	4	200		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
130. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 250 мм, эффективная длина 40 см	130. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 250 mm, effective length 40 cm	4	250	12566	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
131. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei	131. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size	4	250		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 250 мм, эффективная длина 80 см	(diameter x length) 4 mm × 250 mm, effective length 80 cm									
132. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 250 мм, эффективная длина 150 см	132. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 250 mm, effective length 150 cm	4	250		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
133. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean,	133. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 300 mm, effective length 40 cm	4	300	15079	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 300 мм, эффективная длина 40 см										
134. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 300 мм, эффективная длина 80 см	134. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 300 mm, effective length 80 cm	4	300		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
135. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см	135. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4 mm × 300 mm, effective length 150 cm	4	300		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

136. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см	136. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 20 mm, effective length 40 cm	4,5	20	1131	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
137. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см	137. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 20 mm, effective length 80 cm	4,5	20		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
138. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei	138. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size	4,5	20		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см	(diameter x length) 4.5 mm × 20 mm, effective length 150 cm									
139. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 30 мм, эффективная длина 40 см	139. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 30 mm, effective length 40 cm	4,5	30	1508	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
140. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean,	140. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 30 mm, effective length 80 cm	4,5	30		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 30 мм, эффективная длина 80 см										
141. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 30 мм, эффективная длина 150 см	141. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 30 mm, effective length 150 cm	4,5	30		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
142. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 40 мм, эффективная длина 40 см	142. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 40 mm, effective length 40 cm	4,5	40	2262	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

143. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 40 мм, эффективная длина 80 см	143. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 40 mm, effective length 80 cm	4,5	40		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
144. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 40 мм, эффективная длина 150 см	144. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 40 mm, effective length 150 cm	4,5	40		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
145. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei	145. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size	4,5	60	3393	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 60 мм, эффективная длина 40 см	(diameter x length) 4.5 mm × 60 mm, effective length 40 cm										
146. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 60 мм, эффективная длина 80 см	146. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 60 mm, effective length 80 cm	4,5	60		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)		
147. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean,	147. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 60 mm, effective length 150 cm	4,5	60		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)		

размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 60 мм, эффективная длина 150 см										
148. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см	148. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 80 mm, effective length 40 cm	4,5	80	4524	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
149. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см	149. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 80 mm, effective length 80 cm	4,5	80		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

150. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см	150. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 80 mm, effective length 150 cm	4,5	80		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
151. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см	151. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 100 mm, effective length 40 cm	4,5	100	5655	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
152. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei	152. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size	4,5	100		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см	(diameter x length) 4.5 mm × 100 mm, effective length 80 cm									
153. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см	153. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 100 mm, effective length 150 cm	4,5	100		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
154. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean,	154. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 120 mm, effective length 40 cm	4,5	120	6786	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см										
155. Катетер баллонный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см	155. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 120 mm, effective length 80 cm	4,5	120		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
156. Катетер баллонный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см	156. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 120 mm, effective length 150 cm	4,5	120		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

157. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см	157. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 150 mm, effective length 40 cm	4,5	150	8482	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
158. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см	158. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 150 mm, effective length 80 cm	4,5	150		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
159. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei	159. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size	4,5	150		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см	(diameter x length) 4.5 mm × 150 mm, effective length 150 cm									
160. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см	160. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 200 mm, effective length 40 cm	4,5	200	11309	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
161. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean,	161. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 200 mm, effective length 80 cm	4,5	200		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см										
162. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см	162. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 200 mm, effective length 150 cm	4,5	200		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
163. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 250 мм, эффективная длина 40 см	163. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 250 mm, effective length 40 cm	4,5	250	14137	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

164. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм x 250 мм, эффективная длина 80 см	164. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm x 250 mm, effective length 80 cm	4,5	250		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
165. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм x 250 мм, эффективная длина 150 см	165. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm x 250 mm, effective length 150 cm	4,5	250		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
166. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei	166. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size	4,5	300	16964	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 300 мм, эффективная длина 40 см	(diameter x length) 4.5 mm × 300 mm, effective length 40 cm									
167. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 300 мм, эффективная длина 80 см	167. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 300 mm, effective length 80 cm	4,5	300		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
168. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean,	168. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 4.5 mm × 300 mm, effective length 150 cm	4,5	300		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

размер баллона (диаметр x длина) 4,5 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см										
169. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см	169. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 20 mm, effective length 40 cm	5	20	1257	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
170. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см	170. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 20 mm, effective length 80 cm	5	20		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

171. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см	171. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 20 mm, effective length 150 cm	5	20		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
172. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 30 мм, эффективная длина 40 см	172. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 30 mm, effective length 40 cm	5	30	1885	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
173. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei	173. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size	5	30		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 30 мм, эффективная длина 80 см	(diameter x length) 5 mm × 30 mm, effective length 80 cm									
174. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 30 мм, эффективная длина 150 см	174. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 30 mm, effective length 150 cm	5	30		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
175. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean,	175. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 40 mm, effective length 40 cm	5	40	2513	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 40 мм, эффективная длина 40 см										
176. Катетер баллонный с дилатационным лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 40 мм, эффективная длина 80 см	176. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 40 mm, effective length 80 cm	5	40		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
177. Катетер баллонный с дилатационным лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 40 мм, эффективная длина 150 см	177. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 40 mm, effective length 150 cm	5	40		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

178. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 60 мм, эффективная длина 40 см	178. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 60 mm, effective length 40 cm	5	60	3770	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
179. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 60 мм, эффективная длина 80 см	179. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 60 mm, effective length 80 cm	5	60		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
180. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei	180. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size	5	60		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 60 мм, эффективная длина 150 см	(diameter x length) 5 mm × 60 mm, effective length 150 cm									
181. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см	181. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 80 mm, effective length 40 cm	5	80	5026	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
182. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean,	182. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 80 mm, effective length 80 cm	5	80		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см										
183. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см	183. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 80 mm, effective length 150 cm	5	80		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
184. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см	184. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 100 mm, effective length 40 cm	5	100	6283	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

185. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 100 мм, эффективная длина 80 см	185. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm x 100 mm, effective length 80 cm	5	100		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
186. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм x 100 мм, эффективная длина 150 см	186. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm x 100 mm, effective length 150 cm	5	100		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
187. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei	187. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size	5	120	7540	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см	(diameter x length) 5 mm × 120 mm, effective length 40 cm									
188. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см	188. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 120 mm, effective length 80 cm	5	120		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
189. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean,	189. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 120 mm, effective length 150 cm	5	120		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см										
190. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см	190. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 150 mm, effective length 40 cm	5	150	9425	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
191. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см	191. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 150 mm, effective length 80 cm	5	150		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

192. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см	192. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 150 mm, effective length 150 cm	5	150		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
193. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см	193. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 200 mm, effective length 40 cm	5	200	12566	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
194. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei	194. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size	5	200		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см	(diameter x length) 5 mm × 200 mm, effective length 80 cm									
195. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см	195. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 200 mm, effective length 150 cm	5	200		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
196. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean,	196. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 250 mm, effective length 40 cm	5	250	15708	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 250 мм, эффективная длина 40 см										
197. Катетер баллонный с дилатационным лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 250 мм, эффективная длина 80 см	197. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 250 mm, effective length 80 cm	5	250		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
198. Катетер баллонный с дилатационным лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 250 мм, эффективная длина 150 см	198. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 250 mm, effective length 150 cm	5	250		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

199. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 300 мм, эффективная длина 40 см	199. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 300 mm, effective length 40 cm	5	300	18849	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
200. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 300 мм, эффективная длина 80 см	200. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5 mm × 300 mm, effective length 80 cm	5	300		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
201. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei	201. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size	5	300		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см	(diameter x length) 5 mm × 300 mm, effective length 150 cm									
202. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см	202. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 20 mm, effective length 40 cm	5,5	20	1382	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
203. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean,	203. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 20 mm, effective length 80 cm	5,5	20		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см										
204. Катетер баллонный с дилатационным лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см	204. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 20 mm, effective length 150 cm	5,5	20		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
205. Катетер баллонный с дилатационным лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 30 мм, эффективная длина 40 см	205. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 30 mm, effective length 40 cm	5,5	30	2073	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

206. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 30 мм, эффективная длина 80 см	206. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 30 mm, effective length 80 cm	5,5	30		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
207. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 30 мм,	207. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 30 mm, effective length 150 cm	5,5	30		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
208. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной	208. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 40 mm,	5,5	40	2765	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 40 мм, эффективная длина 40 см	effective length 40 cm									
209. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 40 мм, эффективная длина 80 см	209. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 40 mm, effective length 80 cm	5,5	40		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
210. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5	210. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 40 mm, effective length 150 cm	5,5	40		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 40 мм, эффективная длина 150 см									
211. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 5,5 мм × 60 мм, эффективная длина 40 см	211. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 60 mm, effective length 40 cm	5,5	60	4147	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
212. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 5,5 мм × 60 мм, эффективная длина 80 см	212. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 60 mm, effective length 80 cm	5,5	60		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
213. Катетер баллонный	213. Peripheral Drug-coated Balloon	5,5	60		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 60 мм, эффективная длина 150 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 60 mm, effective length 150 cm									
214. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см	214. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 80 mm, effective length 40 cm	5,5	80	5529	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
215. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см	215. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 80 mm, effective length 40 cm	5,5	80		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см	effective length 80 cm									
216. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см	216. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 80 mm, effective length 150 cm	5,5	80		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
217. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5	217. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 100 mm, effective length 40 cm	5,5	100	6911	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 100 мм, эффективная длина 40 см										
218. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см	218. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 100 mm, effective length 80 cm	5,5	100		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
219. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см	219. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 100 mm, effective length 150 cm	5,5	100		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
220. Катетер баллонный	220. Peripheral Drug-coated Balloon	5,5	120	8294	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 120 mm, effective length 40 cm									
221. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см	221. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 120 mm, effective length 80 cm	5,5	120		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
222. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см	222. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 120 mm, effective length 80 cm	5,5	120		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см	effective length 150 cm									
223. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см	223. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 150 mm, effective length 40 cm	5,5	150	10367	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
224. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5	224. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 150 mm, effective length 80 cm	5,5	150		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 150 мм, эффективная длина 80 см									
225. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 5,5 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см	225. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter × length) 5.5 mm × 150 mm, effective length 150 cm	5,5	150		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
226. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 5,5 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см	226. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter × length) 5.5 mm × 200 mm, effective length 40 cm	5,5	200	13823	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
227. Катетер баллонный	227. Peripheral Drug-coated Balloon	5,5	200		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 200 mm, effective length 80 cm									
228. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см	228. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 200 mm, effective length 150 cm	5,5	200		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
229. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 250 мм, эффективная длина 172 см	229. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 250 mm, effective length 172 cm	5,5	250	17278	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 250 мм, эффективная длина 40 см	effective length 40 cm									
230. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 250 мм, эффективная длина 80 см	230. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 250 mm, effective length 80 cm	5,5	250		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
231. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5	231. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 250 mm, effective length 150 cm	5,5	250		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 250 мм, эффективная длина 150 см										
232. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 5,5 мм × 300 мм, эффективная длина 40 см	232. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter × length) 5.5 mm × 300 mm, effective length 40 cm	5,5	300	20734	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
233. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 5,5 мм × 300 мм, эффективная длина 80 см	233. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter × length) 5.5 mm × 300 mm, effective length 80 cm	5,5	300		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
234. Катетер баллонный	234. Peripheral Drug-coated Balloon	5,5	300		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 5,5 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 5.5 mm × 300 mm, effective length 150 cm									
235. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см	235. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 20 mm, effective length 40 cm	6	20	1508	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
236. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см	236. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 20 mm, effective length 40 cm	6	20		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см	effective length 80 cm									
237. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см	237. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 20 mm, effective length 150 cm	6	20		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
238. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6	238. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 30 mm, effective length 40 cm	6	30	2262	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 30 мм, эффективная длина 40 см									
239. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 6 мм × 30 мм, эффективная длина 80 см	239. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 30 mm, effective length 80 cm	6	30		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
240. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 6 мм × 30 мм, эффективная длина 150 см	240. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 30 mm, effective length 150 cm	6	30		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
241. Катетер баллонный	241. Peripheral Drug-coated Balloon	6	40	3016	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм x 40 мм, эффективная длина 40 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm x 40 mm, effective length 40 cm									
242. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм x 40 мм, эффективная длина 80 см	242. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm x 40 mm, effective length 80 cm	6	40		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
243. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм x 40 мм, эффективная длина 150 см	243. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm x 40 mm, effective length 150 cm	6	40		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 40 мм, эффективная длина 150 см	effective length 150 cm									
244. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 60 мм, эффективная длина 40 см	244. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 60 mm, effective length 40 cm	6	60	4524	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
245. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6	245. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 60 mm, effective length 80 cm	6	60		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 60 мм, эффективная длина 80 см										
246. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 6 мм × 60 мм, эффективная длина 150 см	246. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 60 mm, effective length 150 cm	6	60		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
247. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 6 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см	247. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 80 mm, effective length 40 cm	6	80	6032	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
248. Катетер баллонный	248. Peripheral Drug-coated Balloon	6	80		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 80 mm, effective length 80 cm									
249. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см	249. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 80 mm, effective length 150 cm	6	80		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
250. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 100 мм, эффективная длина 7540 мм	250. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 100 mm, effective length 7540 mm	6	100	7540	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см	effective length 40 cm									
251. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см	251. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 100 mm, effective length 80 cm	6	100		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
252. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6	252. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 100 mm, effective length 150 cm	6	100		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 100 мм, эффективная длина 150 см									
253. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 6 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см	253. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter × length) 6 mm × 120 mm, effective length 40 cm	6	120	9048	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
254. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 6 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см	254. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter × length) 6 mm × 120 mm, effective length 80 cm	6	120		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
255. Катетер баллонный	255. Peripheral Drug-coated Balloon	6	120		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 120 mm, effective length 150 cm									
256. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см	256. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 150 mm, effective length 40 cm	6	150	11309	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
257. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см	257. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 150 mm, effective length 80 cm	6	150		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см	effective length 80 cm									
258. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см	258. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 150 mm, effective length 150 cm	6	150		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
259. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6	259. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 200 mm, effective length 40 cm	6	200	15079	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 200 мм, эффективная длина 40 см										
260. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 6 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см	260. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 200 mm, effective length 80 cm	6	200		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
261. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 6 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см	261. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 200 mm, effective length 150 cm	6	200		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
262. Катетер баллонный	262. Peripheral Drug-coated Balloon	6	250	18849	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 250 мм, эффективная длина 40 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 250 mm, effective length 40 cm									
263. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 250 мм, эффективная длина 80 см	263. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 250 mm, effective length 80 cm	6	250		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
264. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 250 мм, эффективная длина 150 см	264. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 250 mm, effective length 150 cm	6	250		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 250 мм, эффективная длина 150 см	effective length 150 cm									
265. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6 мм × 300 мм, эффективная длина 40 см	265. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 300 mm, effective length 40 cm	6	300	22619	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
266. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6	266. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6 mm × 300 mm, effective length 80 cm	6	300		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 300 мм, эффективная длина 80 см									
267. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 6 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см	267. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter × length) 6 mm × 300 mm, effective length 150 cm	6	300		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
268. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 6,5 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см	268. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter × length) 6.5 mm × 20 mm, effective length 40 cm	6,5	20	1634	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
269. Катетер баллонный	269. Peripheral Drug-coated Balloon	6,5	20		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 20 mm, effective length 80 cm									
270. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см	270. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 20 mm, effective length 150 cm	6,5	20		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
271. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 30 мм, эффективная длина 2450 мм	271. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 30 mm, effective length 2450 mm	6,5	30	2450	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 30 мм, эффективная длина 40 см	effective length 40 cm									
272. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 30 мм, эффективная длина 80 см	272. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 30 mm, effective length 80 cm	6,5	30		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
273. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5	273. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 30 mm, effective length 150 cm	6,5	30		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 30 мм, эффективная длина 150 см										
274. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 40 мм, эффективная длина 40 см	274. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 40 mm, effective length 40 cm	6,5	40	3267	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
275. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 40 мм, эффективная длина 80 см	275. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 40 mm, effective length 80 cm	6,5	40		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
276. Катетер баллонный	276. Peripheral Drug-coated Balloon	6,5	40		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 40 мм, эффективная длина 150 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 40 mm, effective length 150 cm									
277. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 60 мм, эффективная длина 40 см	277. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 60 mm, effective length 40 cm	6,5	60	4901	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
278. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 60 мм, эффективная длина 40 см	278. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 60 mm, effective length 40 cm	6,5	60		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 60 мм, эффективная длина 80 см	effective length 80 cm									
279. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 60 мм, эффективная длина 150 см	279. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 60 mm, effective length 150 cm	6,5	60		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
280. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5	280. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 80 mm, effective length 40 cm	6,5	80	6534	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 80 мм, эффективная длина 40 см									
281. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см	281. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 80 mm, effective length 80 cm	6,5	80		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
282. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 80 мм, эффективная длина 150 см	282. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 80 mm, effective length 150 cm	6,5	80		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
283. Катетер баллонный	283. Peripheral Drug-coated Balloon	6,5	100	8168	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 100 mm, effective length 40 cm									
284. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см	284. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 100 mm, effective length 80 cm	6,5	100		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
285. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см	285. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 100 mm, effective length 150 cm	6,5	100		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см	effective length 150 cm									
286. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см	286. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 120 mm, effective length 40 cm	6,5	120	9801	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
287. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5	287. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 120 mm, effective length 80 cm	6,5	120		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 120 мм, эффективная длина 80 см										
288. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 6,5 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см	288. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter × length) 6.5 mm × 120 mm, effective length 150 cm	6,5	120		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
289. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 6,5 мм × 150 мм, эффективная длина 40 см	289. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter × length) 6.5 mm × 150 mm, effective length 40 cm	6,5	150	12252	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
290. Катетер баллонный	290. Peripheral Drug-coated Balloon	6,5	150		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 150 mm, effective length 80 cm									
291. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см	291. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 150 mm, effective length 150 cm	6,5	150		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
292. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 200 мм, эффективная длина 163 см	292. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 200 mm, effective length 163 cm	6,5	200	16336	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см	effective length 40 cm									
293. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см	293. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 200 mm, effective length 80 cm	6,5	200		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
294. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5	294. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 200 mm, effective length 150 cm	6,5	200		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 200 мм, эффективная длина 150 см										
295. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 6,5 мм × 250 мм, эффективная длина 40 см	295. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter × length) 6.5 mm × 250 mm, effective length 40 cm	6,5	250	20420	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
296. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 6,5 мм × 250 мм, эффективная длина 80 см	296. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter × length) 6.5 mm × 250 mm, effective length 80 cm	6,5	250		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
297. Катетер баллонный	297. Peripheral Drug-coated Balloon	6,5	250		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 250 мм, эффективная длина 150см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 250 mm, effective length 150 cm									
298. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 300 мм, эффективная длина 40см	298. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 300 mm, effective length 40 cm	6,5	300	24504	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
299. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 300 мм, эффективная длина 40см	299. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 300 mm, effective length 40 cm	6,5	300		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 300 мм, эффективная длина 80см	effective length 80 cm									
300. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 6,5 мм × 300 мм, эффективная длина 150 см	300. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 6.5 mm × 300 mm, effective length 150 cm	6,5	300		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
301. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7	301. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 20 mm, effective length 40 cm	7	20	1759	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 20 мм, эффективная длина 40 см										
302. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 7 мм × 20 мм, эффективная длина 80 см	302. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 20 mm, effective length 80 cm	7	20		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
303. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 7 мм × 20 мм, эффективная длина 150 см	303. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 20 mm, effective length 150 cm	7	20		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
304. Катетер баллонный	304. Peripheral Drug-coated Balloon	7	30	2639	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 30 мм, эффективная длина 40 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 30 mm, effective length 40 cm									
305. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 30 мм, эффективная длина 80 см	305. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 30 mm, effective length 80 cm	7	30		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
306. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 30 мм, эффективная длина 150 см	306. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 30 mm, effective length 150 cm	7	30		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 30 мм, эффективная длина 150 см	effective length 150 cm									
307. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 40 мм, эффективная длина 40 см	307. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 40 mm, effective length 40 cm	7	40	3518	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
308. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7	308. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 40 mm, effective length 80 cm	7	40		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 40 мм, эффективная длина 80 см									
309. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 7 мм × 40 мм, эффективная длина 150 см	309. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 40 mm, effective length 150 cm	7	40		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
310. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 7 мм × 60 мм, эффективная длина 40 см	310. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 60 mm, effective length 40 cm	7	60	5278	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
311. Катетер баллонный	311. Peripheral Drug-coated Balloon	7	60		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 60 мм, эффективная длина 80 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 60 mm, effective length 80 cm									
312. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 60 мм, эффективная длина 150 см	312. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 60 mm, effective length 150 cm	7	60		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
313. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см	313. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 80 mm, effective length 80 cm	7	80	7037	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 80 мм, эффективная длина 40 см	effective length 40 cm									
314. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 80 мм, эффективная длина 80 см	314. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 80 mm, effective length 80 cm	7	80		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
315. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7	315. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 80 mm, effective length 150 cm	7	80		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 80 мм, эффективная длина 150 см										
316. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 7 мм × 100 мм, эффективная длина 40 см	316. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 100 mm, effective length 40 cm	7	100	8796	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
317. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 7 мм × 100 мм, эффективная длина 80 см	317. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 100 mm, effective length 80 cm	7	100		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
318. Катетер баллонный	318. Peripheral Drug-coated Balloon	7	100		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 100 мм, эффективная длина 150 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 100 mm, effective length 150 cm									
319. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см	319. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 120 mm, effective length 40 cm	7	120	10555	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
320. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 120 мм, эффективная длина 40 см	320. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 120 mm, effective length 40 cm	7	120		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 120 мм, эффективная длина 80 см	effective length 80 cm									
321. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 120 мм, эффективная длина 150 см	321. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 120 mm, effective length 150 cm	7	120		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
322. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7	322. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 150 mm, effective length 40 cm	7	150	13194	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

мм × 150 мм, эффективная длина 40 см									
323. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 7 мм × 150 мм, эффективная длина 80 см	323. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 150 mm, effective length 80 cm	7	150		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
324. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр × длина) 7 мм × 150 мм, эффективная длина 150 см	324. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 150 mm, effective length 150 cm	7	150		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)
325. Катетер баллонный	325. Peripheral Drug-coated Balloon	7	200	17592	40	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)

дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 200 мм, эффективная длина 40 см	Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 200 mm, effective length 40 cm									
326. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см	326. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 200 mm, effective length 80 cm	7	200		80	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	
327. Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 200 мм, эффективная длина 80 см	327. Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 7 mm × 200 mm, effective length 80 cm	7	200		150	0,4953 (0,0195)	1,32 (4)	6	0,018 (0,46)	

ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 7 мм × 200 мм, эффективная длина 150 см	effective length 150 cm									
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 1.1 Дополнительные технические и функциональные характеристики лекарственного покрытия. / Table 1.1 Additional technical and functional characteristics of the Drug coating

Поверхность	Лекарственное средство на поверхности баллона должно быть распределено равномерно, и не должно быть видимых отклонений, таких как неравномерное покрытие лекарственного средства.	Surface	The drug on the surface of the balloon should be coated evenly, and there is no visible phenomenon such as uneven drug coating.
Скорость потери лекарственного средства (стойкость покрытия)	Скорость потери сиролимуса (рапамицина) на поверхности баллона в процессе прохождения через сосуды составляет менее 35% относительно 4,0 мкг/мм ² .	Drug loss rate (coating firmness)	The loss rate of sirolimus (rapamycin) on the surface of balloon in the process of passing through vessels is less than 35% relative to 4.0µg/mm ² .
Скорость высвобождения лекарственного средства	Скорость высвобождения препарата in vitro должна быть более 80 %.	Drug release profile	Drug release rate in vitro should be greater than 80 %.
Толщина лекарственного покрытия	40 мкм ±15 мкм.	The drug coating thickness	40 µm ± 15 µm.

Таблица 1.2 Технические и функциональные характеристики Катетера баллонного дилатационного с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов/ Table 1.2 Technical and functional characteristics of Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei

Номинальное давление в баллоне/ Nominal pressure in the balloon	608 кПа/608 kPa
Максимально допустимое давление в баллоне (номинальное давление разрыва)/ Maximum permissible balloon pressure (nominal burst pressure)	Не менее 1418 кПа/not less than 1418 kPa
Внутренний диаметр совместимого проводникового катетера/ Inner diameter of compatible guiding catheter	Не менее 2,08 мм (0,082 дюйма)/ Not less than 2,08 mm (0,082 in)

Внешний диаметр совместимого проводникового катетера/ Outer diameter of compatible guiding catheter	Не менее 7F (2,33 мм)/Not less than 7F (2,33 mm)
Способность обнаружения рентгеном/ Radio-detectability	Катетер оснащен рентгенконтрастными метками. / The marks of the catheter shall be radio-detectable.
Положение рентгеноконтрастных маркеров/ Radiopaque marker position	Катетер содержит 2 рентгенконтрастные метки, расстояние между метками должно соответствовать эффективной длине баллона, допустимое отклонение $\pm 10\%$. (для катетеров с диаметром баллона 2,0 -7,0 мм)/ The catheter contains 2 radiopaque markers, the distance between the marks must correspond to the length of the balloon, the permissible deviation is $\pm 10\%$. (for catheters with balloon diameter 2.0 - 7.0 mm).
Поверхность/ Surface	1) Наружная поверхность эффективной длины катетера не имеет посторонних включений. 2) Наружная поверхность эффективной длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь дефектов от технологической обработки и поверхностных недостатков, которые могли бы травмировать сосуды в процессе использования катетера. 3) Катетер покрыт гидрофильным покрытием, при этом на внешней поверхности катетера не должно быть капель конденсированного гидрофильного покрытия. 1) The external surface of the effective length of the catheter shall appear free from extraneous matter; 2) The external surface of the effective length of the catheter, including the distal end, shall be free from process and surface defects which could cause trauma to vessels during use. 3) The catheter is coated with a hydrophilic coating, and there should be no condensed hydrophilic coating droplets on the outer surface of the catheter.
Наличие смазки / Availability of lubricants	Неприменимо / NA
Целостность покрытия / Coating integrity	Не должно быть видимых отслоений покрытия. / There should be no visible coating falling off.

Дистальный конец / Distal tip	Дистальный конец должен быть гладким, закругленным, конусообразным или обработанным подобным образом, чтобы свести к минимуму травму сосудов во время использования. / In order to minimize trauma to vessels during use, the tip of the distal end should be smooth, rounded, tapered or similarly finished.
Коррозионная стойкость / Corrosion resistance	Металлические компоненты катетера не должны иметь признаков коррозии. / Metallic components of the catheter intended for fluid path contact shall show no signs of corrosion.
Герметичность / Freedom from Leakage	Хаб или узел соединения фитингов или другие части катетера не должны допускать утечку жидкости. Не должно быть утечки воздуха через хаб в процессе аспирации. / The hub or connection fitting assembly or any other part of the catheter shall not leak liquid. Air shall not leak into the hub assembly during aspiration
Хаб / Hub	Хаб оснащен разъемом Льер типа «female». / Catheter is supplied with integral hub, it shall be a female Luer hub.
Скорость потока и высокопоточная инъекция / Flow rate and highflow injection	Неприменимо. / NA
Боковые отверстия / Side ports	Неприменимо. / NA
Испытание баллона на усталость / Balloon fatigue	Баллон выдерживает 10 циклов наполнения до номинального давления разрыва. В катетере не должно быть утечки или признаков повреждения, таких как грыжа или разрыв катетера. / The acceptance criteria are that the cycle number of balloon should be 10 times. There shall be no leakage or evidence of damage, such as herniation or bursting of the shaft or balloon.
Максимальное время надувания баллона / Maximum inflation time of balloon	15 секунд/ 15 second

Время спуска баллона / Deflation time of balloon	Время спуска баллона от номинального давления разрыва до окончания спуска должно быть меньше времени спуска, указанного в таблице: / The time of balloon from RBP to the end of deflation shall be less than the deflation time specified in Table: <table><tr><td>Эффективная длина баллона, мм, ±10%/ Effective balloon length, mm, ±10%</td><td>Время спуска баллона (с) / Deflation time of balloon (s)</td></tr><tr><td>≤100</td><td>60</td></tr><tr><td>> 100 ≤200</td><td>120</td></tr><tr><td>> 200 ≤300</td><td>180</td></tr></table>			Эффективная длина баллона, мм, ±10%/ Effective balloon length, mm, ±10%	Время спуска баллона (с) / Deflation time of balloon (s)	≤100	60	> 100 ≤200	120	> 200 ≤300	180											
Эффективная длина баллона, мм, ±10%/ Effective balloon length, mm, ±10%	Время спуска баллона (с) / Deflation time of balloon (s)																					
≤100	60																					
> 100 ≤200	120																					
> 200 ≤300	180																					
Усилие на разрыв / Peak Tensile Force	<table><tr><th>Испытуемый участок / Test Piece</th><th>Наименьший наружный диаметр трубчатой части испытываемого участка, мм / Smallest outer diameter, mm)</th><th>Минимальное усилие на разрыв, Н / Acceptance Criteria, N</th></tr><tr><td>Кончик — баллон (внутренняя часть) / Tip-IB-Balloon</td><td><0,55</td><td>≥3</td></tr><tr><td>Внутренняя часть корпуса / Inner Body</td><td>≥ 0,55 < 0,75</td><td>≥3</td></tr><tr><td>Внешняя часть корпуса – баллон / Outer Body-Balloon</td><td>≥1,15 < 1,85</td><td>≥10</td></tr><tr><td>Внешняя часть корпуса / Outer Body</td><td>≥1,15 < 1,85</td><td>≥10</td></tr><tr><td>Внешняя часть корпуса - внутренняя часть корпуса / Outer Body-Inner Body</td><td>≥1,15 < 1,85</td><td>≥10</td></tr><tr><td>Хаб - внешняя часть корпуса / Hub-Outer Body</td><td>≥1,15 < 1,85</td><td>≥10</td></tr></table>	Испытуемый участок / Test Piece	Наименьший наружный диаметр трубчатой части испытываемого участка, мм / Smallest outer diameter, mm)	Минимальное усилие на разрыв, Н / Acceptance Criteria, N	Кончик — баллон (внутренняя часть) / Tip-IB-Balloon	<0,55	≥3	Внутренняя часть корпуса / Inner Body	≥ 0,55 < 0,75	≥3	Внешняя часть корпуса – баллон / Outer Body-Balloon	≥1,15 < 1,85	≥10	Внешняя часть корпуса / Outer Body	≥1,15 < 1,85	≥10	Внешняя часть корпуса - внутренняя часть корпуса / Outer Body-Inner Body	≥1,15 < 1,85	≥10	Хаб - внешняя часть корпуса / Hub-Outer Body	≥1,15 < 1,85	≥10
Испытуемый участок / Test Piece	Наименьший наружный диаметр трубчатой части испытываемого участка, мм / Smallest outer diameter, mm)	Минимальное усилие на разрыв, Н / Acceptance Criteria, N																				
Кончик — баллон (внутренняя часть) / Tip-IB-Balloon	<0,55	≥3																				
Внутренняя часть корпуса / Inner Body	≥ 0,55 < 0,75	≥3																				
Внешняя часть корпуса – баллон / Outer Body-Balloon	≥1,15 < 1,85	≥10																				
Внешняя часть корпуса / Outer Body	≥1,15 < 1,85	≥10																				
Внешняя часть корпуса - внутренняя часть корпуса / Outer Body-Inner Body	≥1,15 < 1,85	≥10																				
Хаб - внешняя часть корпуса / Hub-Outer Body	≥1,15 < 1,85	≥10																				
Зависимость диаметра баллона от давления наполнения / Balloon compliance	Каждое отдельное измерение должно находиться в пределах ±10 % от приведенного ниже установленного значения между номинальным давлением и номинальным разрывным давлением. / Each individual measurement must be within ±10% of the fitted value showed below between nominal pressure and rated burst pressure.																					

Диаметр баллона (мм) / Balloon diameter (mm)	Давление, кПа (атм)/ Pressure, kPa (atm)						
	405 (4)	608 (6)	810 (8)	1013 (10)	1216 (12)	1418 (14)	1621 (16)
2,0	1,94	2,00	2,06	2,13	2,19	2,25	2,32
2,5	2,43	2,50	2,57	2,64	2,71	2,78	2,85
3,0	2,91	3,00	3,10	3,18	3,25	3,31	3,42
3,5	3,40	3,50	3,66	3,75	3,82	3,88	3,97
4,0	3,89	4,00	4,13	4,24	4,31	4,38	4,50
4,5	4,39	4,50	4,68	4,79	4,87	4,95	5,06
5,0	4,88	5,00	5,17	5,29	5,38	5,47	5,56
5,5	5,38	5,50	5,70	5,83	5,93	6,02	6,11
6,0	5,88	6,00	6,14	6,26	6,35	6,44	6,53
6,5	6,27	6,50	6,58	6,71	6,81	6,90	7,00
7,0	6,87	7,00	7,17	7,31	7,42	7,53	7,62

Примечание/ Note:

	NP – давление наполнения баллона, необходимое для достижения номинального диаметра баллона / NP – Nominal Pressure
	RBP – номинальное давление разрыва баллона / RBP - Rated Burst Pressure

Описание принадлежностей, медицинских изделий или изделий, не являющихся медицинскими, но предусмотренных для использования в комбинации с заявленным медицинским изделием

Key accessories, medical devices or non-medical devices, to be used in combination with medical device submitted for registration

В комбинации с заявленным медицинским изделием могут использоваться: • Проводник(и) подходящего размера для продвижения баллонного катетера • Контрастное вещество • Стерильный физиологический раствор. • Индефлятор с манометром • Индефлятор со шприцем типа Люэр • Гемостатический клапан • Манифолды • Проводниковый катетер подходящего размера	The following may be used in combination with the declared medical device: • Guide(s) of appropriate size to advance the balloon catheter • Contrast agent • Sterile saline solution. • Inflator with pressure gauge • Inflator with luer type syringe • Hemostatic valve • Manifolds • Guiding catheter of appropriate size
Сведения о лекарственных средствах входящих в состав медицинского изделия	Information about the medicines included in the medical device
Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслуминальной ангиопластики периферических сосудов содержит сиролимус (также известного как рапамицин). Дозировка препарата составляет примерно 4 мкг/мм², а отклонение концентрации препарата не более 25% (4,0 мкг/мм² ±25%) для надутого баллона. Химическое название рапамицина: (3S,6R,7E,9R,10R,12R,14S,15E,17E,19E,21S, 23S,26R,27R,34aS)-9,10,12,13,14,21, 22,23,24,25,26,27,32,33,34,34a-Гексадекагидро-9,27-дигидрокси-3-[(1R)-2-[(1S,3R,4R)-4-гидрокси-3-метоксициклогексил]-1-метилэтил]-10,21-диметокси-6,8,12,14,20,26-гексаметил-23,27-эпокси-3Н-пиридо[2,1-с] [1, 4] оксаазациклогентриаконтин-1, 5, 11, 28, 29 (4H, 6H, 31H)-пентанон. Покрытие катетера содержит вспомогательное вещество бутилированный гидрокситолуол. Молекулярная формула бутилированного гидрокситолуола: C₁₅H₂₄O. Массовое соотношение лекарственного препарата сиролимус к вспомогательному веществу составляет 100:1 (99,01% сиролимуса и к	Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei consists of sirolimus (also known as Rapamycin). The drug dosage is approximately 4 µg/mm², and the deviation of drug concentration is not more than 25% (4.0±25%µg/mm²) is for an inflated balloon. The chemical name of Rapamycin is (3S,6R,7E,9R,10R,12R,14S,15E,17E,19E,21S,23S,26R,27R,34aS)-9,10,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34, 34a-Hexadecahydro-9, 27-dihydroxy-3- [(1R)-2- [(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethyl]-10, 21-dimethoxy-6, 8, 12, 14, 20, 26-hexamethyl-23, 27-epoxy-3H-pyrido[2, 1-c] [1, 4] oxaazacyclohentriacontine-1, 5, 11, 28, 29 (4H, 6H, 31H)-pentanone. The catheter coating contains the excipient butylated hydroxytoluene. The molecular formula of butylated hydroxytoluene is C₁₅H₂₄O. The mass ratio of the drug sirolimus to the excipient is 100:1 (99.01% sirolimus and 0.99% butylated hydroxytoluene). The drug rapamycin its content/drug loss rate/release rate all measured using High Performance Liquid Chromatography (HPLC).

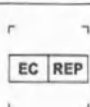
0,99% бутилированного гидрокситолуола). Лекарственный препарат рапамицин, его содержание/скорость потери препарата/скорость высвобождения измеряются с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).	
Сведения о материалах животного/человеческого происхождения	Information about materials of animal/human origin
Неприменимо	Not applicable.
Условия эксплуатации медицинского изделия	Operating conditions of the medical device
Медицинское изделие предназначено для использования во внутренней среде организма, использовать при температуре от 32°C до 42°C.	Medical devices, that are intended to be used in the body's internal environment, are used in temperature range from 32°C to 42°C.
Условия транспортировки и хранения медицинского изделия	Storage and transportation conditions of the medical device
Условия хранения и транспортирования: Температура: 0–30 °C Влажность: 0-80% Во время транспортировки избегайте смятия груза, прямых солнечных лучей, намокания от дождя и снега, а также высоких температур.	Storage and transportation conditions: Temperature: 0-30°C Humidity: 0-80% During transportation, avoid weight pressing, direct sunlight, rain and snow soaking, and high temperature.
Комплект поставки	Package contents
Пример комплекта поставки во вторичной упаковке: 1) Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических сосудов Shun Ocean, размер баллона (диаметр x длина) 2 мм × 20 мм, эффективная длина 40 см – 1 шт. 2) Инструкция по применению – 1 шт.	Example of a delivery set in inner packaging: 1) Peripheral Drug-coated Balloon Dilatation Catheter Shunmei Shun Ocean, balloon size (diameter x length) 2 mm × 20 mm, effective length 40 cm – 1 pc. 2) Instructions for use – 1 pc.
Срок годности / срок службы	Shelf life / Service life
3 года	3 years
Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия	Disposal

Утилизируйте в соответствии с применимыми местными, региональными нормами. По истечении срока годности или при наличии дефектов изделие утилизируют согласно СанПиН 2.1.3684, класс А. Утилизация изделия, имевшего контакт с биологическими жидкостями, должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684, класс Б.	Dispose in accordance with applicable local, regional regulations. After the expiration date or in the presence of defects, the device is disposed of in accordance with SanPiN 2.1.3684, class A. Disposal of a product that has come into contact with biological fluids must be in accordance with the requirements of SanPiN 2.1.3684, class B.
Гарантийные обязательства	Warranty
Производитель: Shunmei Medical Co., Ltd («Шунмей Медикал Ко., Лтд», КНР) Телефон: +0086-0752-3306949 Электронный адрес: nora@shunmed.com Юридический адрес: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China Уполномоченный представитель: ООО «ЦИСЗ» Телефон: +7 (495) 798-01-60 Электронный адрес: office@hscmail.pro Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232 Срок сохранения стерильности изделия – 3 года	Manufacturer: Shunmei Medical Co., Ltd Telephone: +0086-0752-3306949 Email address: nora@shunmed.com Legal address: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China Authorised representative: LLC «HSC» Telephone: +7 (495) 798-01-60 Email address: office@hscmail.pro Legal address: 127473, Moscow, Seleznevskaya st, 11A, building 2, floor/room/office 2/30, 32/232 Shelf life – 3 years
Рекламация	Reclamation

Производитель: Shunmei Medical Co., Ltd («Шунмей Медикал Ко., Лтд», КНР) Телефон: +0086-0752-3306949 Электронный адрес: nora@shunmed.com Юридический адрес: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China Уполномоченный представитель: ООО «ЦИСЗ» Телефон: +7 (495) 798-01-60 Электронный адрес: office@hscmail.pro Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт/ком/оф 2/30,32/232	Manufacturer: Shunmei Medical Co., Ltd Telephone: +0086-0752-3306949 Email address: nora@shunmed.com Legal address: 3rd Floor and R401 of building B, No.8 of 1st Jinlong Road, Baolong Industrial Zone, LongGang District, 518116 Shenzhen, Guangdong, China Authorised representative: LLC «HSC» Telephone: +7 (495) 798-01-60 Email address: office@hscmail.pro Legal address: 127473, Moscow, Seleznevskaya st, 11A, building 2, floor/room/office 2/30, 32/232
Сведения о маркировке/ Labeling	
Первичная упаковка содержит следующую информацию: - наименование МИ, размер МИ (диаметр и длина баллона; эффективная длина катетера, наружный диаметр внешнего корпуса катетера); - логотип Shunmei; - номер по каталогу; - код партии; - использовать до; - дата изготовления; - символ «Запрет на повторное применение»; - символ «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению»; - символ «Осторожно»; - символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»; - изготовитель, адрес, адрес места производства; - символ «Изготовитель»; - символ «Не допускать воздействия солнечного света»; - символ «Температурный диапазон»;	Primary package contains following information: - name of MD, size of MD (balloon diameter and length; effective catheter length, outer diameter of the outer catheter body); - Shunmei logo; - catalogue number; - batch code; - use by date; - date of manufacture; - symbol «Do not re-use»; - symbol «Do not use if package is damage and consult instructions for use»; - symbol «Caution»; - symbol «Consult instructions for use or consult electronic instructions for use»; - name of manufacturer and address, factory address; - symbol «Manufacture»; - symbol «Keep away from sunlight»; - symbol «Temperature limit»; - QR-code;

- QR-код; - символ «Уникальный идентификатор изделия»; - символ «Медицинское изделие»; - Штрих-код; - условия хранения; - символ «Апирогенно»; - символ «Стерилизация оксидом этилена»; - символ «Не допускать воздействия влаги»; - символ «Не стерилизовать повторно»; - символ «Содержит лекарственные средства»; - символ «Диапазон влажности»; - символ «Хрупкое, обращаться осторожно»; - символ «Система с одинарным стерильным барьером»; - символ «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе»; - сведения об уполномоченном представителе в Европейском сообществе; - CE символ; - надпись «Сделано в Китае» - размеры совместимых медицинских изделий (диаметр наибольшего проводника, внутренний и внешний диаметр проводникового катетера); - NP – давление наполнения баллона, необходимое для достижения номинального диаметра баллона; - RBP – номинальное давление разрыва баллона; - надписи «Диаметр баллона (мм)», «Давление», «кПа», «атм», «Не превышайте номинально давление разрыва». Вторичная и транспортная упаковки содержат следующую информацию: - наименование МИ, размер МИ (диаметр и длина баллона; эффективная длина катетера, наружный диаметр внешнего корпуса катетера); - логотип Shunmei; - количество изделий в упаковке; - номер по каталогу;	- symbol «Unique Device Identifier»; - symbol «Medical Device»; - Barcode; - Storage conditions; - symbol «Non-pyrogenic»; - symbol «Sterilized using ethylene oxide»; - symbol «Keep dry»; - symbol «Do not re-sterilize»; - symbol «Contains a medicinal substance»; - symbol «Humidity limitation»; - symbol «Fragile, handle with care»; - symbol «Single sterile barrier system»; - symbol «Authorized representative in the European Community»; - information about the authorized representative in the European Community - CE Marking; - «Made in China» inscription; - size of compatible medical devices (diameter of the largest guide wire, the inner and outer diameter of the guiding catheter); - NP- Nominal Pressure; - RBP - Rated Burst Pressure; - inscription «Balloon Diameter (mm)», «Pressure», «kPa», «atm», «Do not exceed the rated burst pressure (RBP)». Inner and transport package contains following information: - name of MD, size of MD (balloon diameter and length; effective catheter length, outer diameter of the outer catheter body); - Shunmei logo; - quantity in the package; - catalogue number; - batch code;
---	---

- код партии; - использовать до; - дата изготовления; - символ «Запрет на повторное применение»; - символ «Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению»; - символ «Осторожно»; - символ «Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде»; - изготовитель, адрес, адрес места производства; - символ «Изготовитель»; - символ «Не допускать воздействия солнечного света»; - символ «Температурный диапазон»; - QR-код; - символ «Уникальный идентификатор изделия»; - символ «Медицинское изделие»; - Штрих-код; - условия хранения; - символ «Апирогенно»; - символ «Стерилизация оксидом этилена»; - символ «Не допускать воздействия влаги»; - символ «Не стерилизовать повторно»; - символ «Содержит лекарственные средства»; - символ «Диапазон влажности»; - символ «Хрупкое, обращаться осторожно»; - символ «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе»; - сведения об уполномоченном представителе в Европейском сообществе; - CE символ; - надпись «Сделано в Китае» - размеры совместимых медицинских изделий (диаметр наибольшего проводника, внутренний и внешний диаметр проводникового катетера); - NP – давление наполнения баллона, необходимое для достижения	- use by date; - date of manufacture; - symbol «Do not re-use»; - symbol «Do not use if package is damage and consult instructions for use»; - symbol «Caution»; - symbol «Consult instructions for use or consult electronic instructions for use»; - name of manufacturer and address, factory address; - symbol «Manufacture»; - symbol «Keep away from sunlight»; - symbol «Temperature limit»; - QR-code; - symbol «Unique Device Identifier»; - symbol «Medical Device»; - Barcode; - Storage conditions; - symbol «Non-pyrogenic»; - symbol «Sterilized using ethylene oxide»; - symbol «Keep dry»; - symbol «Do not re-sterilize»; - symbol «Contains a medicinal substance»; - symbol «Humidity limitation»; - symbol «Fragile, handle with care»; - symbol «Authorized representative in the European Community»; - information about the authorized representative in the European Community - CE Marking; - «Made in China» inscription; - size of compatible medical devices (diameter of the largest guide wire, the inner and outer diameter of the guiding catheter); - NP- Nominal Pressure; - RBP - Rated Burst Pressure;
---	---

номинального диаметра баллона; - RBP – номинальное давление разрыва баллона; - надписи «Диаметр баллона (мм)», «Давление», «кПа», «атм», «Не превышайте номинально давление разрыва».		- inscription «Balloon Diameter (mm)», «Pressure», «kPa», «atm», «Do not exceed the rated burst pressure (RBP)».	
Символы/Symbol			
	Caution/Осторожно		Keep dry/Не допускать воздействия влаги
	Batch code/Код партии		Non-pyrogenic/Апирогенно
	Do not re-sterilize/Не стерилизовать повторно		Do not use if package is damaged and consult instructions for use/Не использовать, при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Use by date/Использовать до		Do not re-use/Запрет на повторное применение
	Sterilized by ethylene oxide/Стерилизация оксидом этилена		Date of manufacture/Дата изготовления
	Catalogue number/Номер по каталогу		Consult instructions for use or consult electronic instructions for use /Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Manufacturer/Изготовитель		Keep away from sunlight/Не допускать воздействия солнечного света
	Temperature limit/Температурный диапазон		Authorized representative of European Community/Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе
	CE Marking/Маркировка CE	XXXX	Notified Body ID number/Идентификационный номер уполномоченного органа

	Fragile, handle with care/ Хрупкое, обращаться осторожно		Contains a medicinal substance/ Содержит лекарственные средства
	Humidity limitation/ Диапазон влажности		Single sterile barrier system/ Система с одинарным стерильным барьером
	Medical Device/ Медицинское изделие		Unique Device Identifier/ Уникальный идентификатор изделия
	The number of products in the package is 1./ Количество изделий в упаковке – 1.		The number of products in a package is 50./ Количество изделий в упаковке – 50.
Дата выпуска или пересмотра инструкции		Date of issue or revision of instructions	
27.05.2024		27.05.2024	

СЕРТИФИКАТ

/логотип/
ККСРМТ

Китайский комитет содействия развитию международной торговли - Торгово-
промышленная палата Китая

02195531

Логотип «ККСРМТ»

**Китайский комитет содействия развитию международной торговли
Торгово-промышленная палата Китая**

/QR-код/

СЕРТИФИКАТ

№ 244403A0/026672

**Печать:
КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ
ККСРМТ
(24)**

НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО: печать компании «Шунмей Медикал Ко. Лтд.» на прилагаемом ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

**Печать:
ККСРМТ
СЕРТИФИКАТ
(24)**

**КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ**

**Печать:
КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ
ККСРМТ
(24)**

/подпись/

Подпись уполномоченного лица: Ху На

Дата: 29 мая 2024 г.

Веб-сайт для проверки сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Согласовано

«Шунмей Медикал Ко. Лтд.» (Shunmei Medical Co., Ltd)

Организация

3-й этаж и R401 здание В, № 8 1-й дороги Цзиньлун,
промышленная зона Баолун, район Лунган, Шэньчжэнь
518116, Гуандун, Китай

Адрес

Генеральный директор

Должность

Ту Чжэньцзинь

Фамилия, имя

27.05.2024 г.

Дата ДД.ММ.ГГГГ

/подпись/

Подпись

Печать:

«ШУНМЕЙ МЕДИКАЛ КО. ЛТД.» (SHUNMEI MEDICAL
CO., LTD)* ШЭНЬЧЖЭНЬ, КИТАЙ

Инструкция по применению на медицинское изделие:

«Катетер баллонный дилатационный с лекарственным покрытием Shunmei для чрескожной
транслюминальной ангиопластики периферических сосудов в вариантах исполнения»

2024

Печать:

КИТАЙСКИЙ КОМИТЕТ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
СЕРТИФИКАТ
ККСРМТ
(24)

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Ульбашевой Фатимой Владиславовной.

Российская Федерация

Город Москва

Четырнадцатого августа две тысячи двадцать четвёртого года.

Я, Корсик Мария Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Ульбашевой Фатимы Владиславовны.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2024- 39-646

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



М.А. Корсик

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
115 лист(-а/-ов)

Нотариус

