

Директор по развитию
АО «Елатомский приборный завод



Никитина Т.Н.
2023

Руководства по эксплуатации медицинского изделия
«Тележки медицинские по ГИКС.942810.110 ТУ»

- очистку от загрязнений поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт тележки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность тележки.

10. Утилизация

Тележка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тележка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Символы, наносимые на транспортную упаковку



Беречь от влаги



Верх



Хрупкое. Осторожно



Предел по количеству ярусов в штабеле

12. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.1) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.110 ТУ и признана годной для эксплуатации.

☐ Код 0000000 Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.1)

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13


E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

ЕЛАМЕД

ЕЛАМЕД

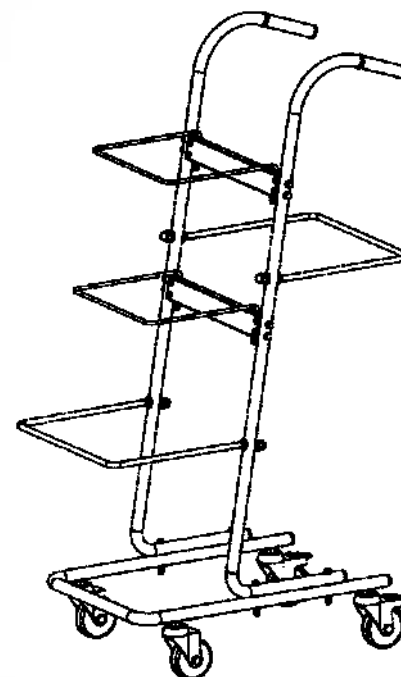

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.110 ТУ

вариант исполнения

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.1)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГИКС.942814.101 РЭ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.1) (в дальнейшем - тележка), предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственного оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Противопоказания: не имеет.

Побочные эффекты: не выявлены.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование тележки может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части тележек не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация тележек проводится в резиновых перчатках !

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

обеспечить передвижение тележки с включенным стопором колёс, что может привести к самопроизвольному откручиванию и неизбежной поломке ступицы. Исползовать тележку без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: $8,5 \pm 0,85$ кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: $(640 \times 392 \times 1097) \pm 10\%$.

1.3 Внутренние размеры держателей для медицинских изделий (длина x ширина) мм:

верхний передний держатель $(271 \times 214) \pm 5$;

средний передний держатель $(271 \times 214) \pm 5$;

нижний передний держатель $(333 \times 271) \pm 5$;

задний держатель $(333 \times 271) \pm 5$.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики тележки при равномерном распределении нагрузки:

- на верхний передний держатель – 5 кг;

предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 6 кг;

- на средний передний держатель – 5 кг;

предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 6 кг;

- на нижний передний держатель – 8 кг;

предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 10 кг;

- на задний держатель – 8 кг;

предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 10 кг;

- суммарная нагрузка на тележку – 26 кг;

предельный вес нагрузки на тележку (максимальная суммарная нагрузка) – 32 кг.

2.3 Держатели обеспечивают возможность установки медицинских изделий и их устойчивое положение.

2.4 Конструкция тележки обеспечивает устойчивость к опрокидыванию при нагрузке 0,055 кН (55 Н) в продольном и поперечном направлении

2.5 Тележка установлена на 4 колёсные опоры, не регулируемые по высоте, 2 колеса снабжены стопором. Габаритные размеры колёсных опор, мм, длина x ширина x высота – $(110 \times 50 \times 105) \pm 5$; диаметр, мм – 75 ± 2 ; масса, кг: $(0,3 \pm 0,1)$. Максимальная допустимая нагрузка на одну опору, 45 даН.

2.6 Стопоры колёсных опор должны включаться при приложении на педаль максимального усилия 150 Н.

2.7 Максимальное усилие, необходимое для передвижения тележки на колёсных опорах 100 Н.

2.8 Максимальный шум при передвижении тележек 65 дБ на расстоянии 1 м.

2.9 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием тележки должно быть 50 мм.

2.10 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – 2 ± 1 мм.

2.11 Металлические и неметаллические неорганические покрытия тележек должны быть без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и должны соответствовать ГОСТ 9.301-86 для группы условий эксплуатации I по ГОСТ 15150-69.

2.12 При эксплуатации тележка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от $+10^\circ\text{C}$ до $+35^\circ\text{C}$; номинальное значение относительной влажности 80% при $+25^\circ\text{C}$.

2.13 Каркас изделия изготовлен из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием. В конструкции предусмотрены 4 держателя. Для удобного управления во время перемещения тележки в конструкции предусмотрены 2 изогнутые ручки. Изделие устанавливается на 4 колёсных опорах. ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.1)	1
- Руководство по эксплуатации	1
- Инструкция по сборке	1

4. Транспортирование и хранение

4.1 Тележка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Тележка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до $+50^\circ\text{C}$, относительная влажность воздуха до 100% при температуре $+25^\circ\text{C}$).

4.3 Условия хранения тележки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до $+40^\circ\text{C}$ и относительная влажность не более 98% при $+25^\circ\text{C}$).

5. Дезинфекция

Поверхности тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения тележки или перевозки её в упаковке при температуре ниже $+10^\circ\text{C}$ изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки тележки проверьте следующее:

- крепёжные элементы тележки выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации тележки

Во избежание преждевременного выхода из строя тележки не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях тележки, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности тележки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тележки включает в себя:

- поддержание технического состояния тележки в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт тележки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность тележки.

10. Утилизация

Тележка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тележка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Символы, наносимые на транспортную упаковку



Беречь от влаги



Хрупкое. Осторожно



Верх

Предел по количеству ярусов в штабеле

12. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод. 2) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.110 ТУ и признана годной для эксплуатации.

☐ Код 0000000 Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.2)

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipm@elamed.com

Сайт компании: ipm.elamed.com

ЕЛАМЕД

Регистрационное удостоверение

ЕЛАМЕД



ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.110 ТУ
вариант исполнения

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.2)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942814. 102 РЭ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод. 2) (в дальнейшем - тележка), предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Противопоказания: не имеет.

Побочные эффекты: не выявлены.

Меры предосторожности:

Неадекватное использование тележки может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

Важные части тележек не имеют контакта с организмом человека. Эксплуатация тележек проводится в резиновых перчатках!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить передвижение тележки с включенным стопором колёс, что может привести к их самопроизвольному откручиванию и неизбежной поломке ступицы. Использовать тележку без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры

- 1.1 Масса изделия: $8,5 \pm 0,85$ кг.
- 1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: $(640 \times 392 \times 1097) \pm 10\%$.
- 1.3 Внутренние размеры держателей для медицинских изделий (длина x ширина) мм: верхний передний держатель $(308 \times 196) \pm 5$; средний передний держатель $(271 \times 214) \pm 5$; нижний передний держатель $(333 \times 271) \pm 5$; задний держатель $(333 \times 271) \pm 5$.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики тележки при равномерном распределении нагрузки:

- на верхний передний держатель – 5 кг;
- предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 6 кг;
- на средний передний держатель – 5 кг;
- предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 6 кг;
- на нижний передний держатель – 8 кг;
- предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 10 кг;
- на задний держатель – 8 кг;
- предельный вес нагрузки (максимальная суммарная нагрузка) – 10 кг;
- суммарная нагрузка на тележку – 26 кг;
- предельный вес нагрузки на тележку (максимальная суммарная нагрузка) – 32 кг.

2.3 Держатели обеспечивают возможность установки медицинских изделий и их устойчивое положение.

2.4 Конструкция тележки обеспечивает устойчивость к опрокидыванию при нагрузке 0,055 кН (55 Н) в продольном и поперечном направлении

2.5 Тележка установлена на 4 колёсные опоры, не регулируемые по высоте, 2 колеса снабжены стопором. Габаритные размеры колесных опор, мм, длина x ширина x высота - $(110 \times 50 \times 105) \pm 5$; диаметр, мм - 75 ± 2 ; масса, кг: $0,3 \pm 0,1$. Максимальная допустимая нагрузка на одну опору, 45 даН.

2.6 Стопоры колёсных опор должны включаться при приложении на педаль максимального усилия 150 Н.

2.7 Максимальное усилие, необходимое для передвижения тележки на колёсных опорах 100 Н.

2.8 Максимальный шум при передвижении тележек 65 дБ на расстоянии 1 м.

2.9 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием тележки должно быть 50 мм.

2.10 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола - 2 ± 1 мм.

2.11 Металлические и неметаллические неорганические покрытия тележек должны быть без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и должны соответствовать ГОСТ 9.301-86 для группы условий эксплуатации I по ГОСТ 15150-69.

2.12 При эксплуатации тележка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от $+10^\circ\text{C}$ до $+35^\circ\text{C}$; номинальное значение относительной влажности 80% при $+25^\circ\text{C}$.

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU   трубы с полимерно-порошковым покрытием. В конструкции предусмотрены 4 держателя. Для удобного управления во время перемещения тележки в конструкции предусмотрены 2 изогнутые ручки. Изделие устанавливается на 4 колёс-

ные опоры, 2 из которых снабжены стопором. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод. 2)	1
- Руководство по эксплуатации	1
- Инструкция по сборке	1

4. Транспортирование и хранение

4.1 Тележка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Тележка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до $+50^\circ\text{C}$, относительной влажности воздуха до 100% при температуре $+25^\circ\text{C}$).

4.3 Условия хранения тележки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до $+40^\circ\text{C}$ и относительная влажность не более 98% при $+25^\circ\text{C}$).

5. Дезинфекция

Поверхности тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения тележки или перевозки её в упаковке при температуре ниже $+10^\circ\text{C}$ изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки тележки проверьте следующее:

- крепёжные элементы тележки выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации тележки

Во избежание преждевременного выхода из строя тележки не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
- скопление жидкости на поверхностях тележки, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности тележки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тележки включает в себя:

- поддержание технического состояния тележки в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

10. Утилизация

Тележка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тележка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Символы, наносимые на транспортную упаковку



Беречь от влаги



Хрупкое. Осторожно



Верх



Предел по количеству ярусов в штабеле

12. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.3) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.110 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipu@elamed.com

Сайт компании: ipu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

ЕЛАМЕД

ЕЛАМЕД



ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.110 ТУ
вариант исполнения

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.3)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942814.103 РЭ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.3) (в дальнейшем - тележка), предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Противопоказания: не имеет.

Побочные эффекты: не выявлены.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование тележки может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части тележек не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация тележек проводится в резиновых перчатках !

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2023 г.

...перемещение тележки с включенным стопором колёс, что может привести к самопроизвольному опрокидыванию и неизбежной поломке ступицы. Использовать тележку без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: 20,4±2,04 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (1041х506х884)±10%.

1.3 Внутренние размеры полок-корзин (длина х ширина х высота) мм:

верхняя полка-корзина (892х464х169)±5;

нижняя полка-корзина (892х464х215)±5;

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики полок-корзин при равномерном распределении нагрузки:

- на верхнюю полку-корзину – 50 кг;

- на нижнюю полку-корзину – 50 кг;

- предельный вес нагрузки на изделие (максимальная суммарная нагрузка) – 100 кг.

2.3 Верхняя либо нижняя полка - корзина тележки обеспечивают возможность размещения медицинских изделий и их устойчивое положение.

2.4 Конструкция тележки медицинской для процедурных кабинетов (мод.3) должна обеспечивать устойчивость к опрокидыванию при нагрузке 0,3 кН (300 Н) в продольном и 0,2 кН (200 Н) поперечном направлении.

2.5 Тележка установлена на 4 колёсные опоры, не регулируемые по высоте, 2 колеса снабжены стопором. Габаритные размеры колесных опор, мм, длина х ширина х высота - (110х50х105)±5; диаметр, мм - 75±2; масса, кг: 0,3±0,1. Максимальная допустимая нагрузка на одну опору, 45 даН.

2.6 Максимальное усилие, необходимое для передвижения тележки на колёсных опорах 100 Н.

2.7 Стопоры колёсных опор должны включаться при приложении на педаль максимального усилия 150 Н.

2.8 Максимальный шум при передвижении тележек 65 дБ на расстоянии 1 м.

2.9 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием тележки должно быть 50 мм.

2.10 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола 2±1 мм.

2.11 Максимальный шум при передвижении тележек 65 дБ на расстоянии 1 м.

2.12 Металлические и неметаллические неорганические покрытия тележек должны быть без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и должны соответствовать ГОСТ 9.301-86 для группы условий эксплуатации I по ГОСТ 15150-69.

2.13 При эксплуатации тележка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.14 Каркас изделия изготовлен из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием. В конструкции предусмотрены 2 ручки, 2 решетчатые металлические полки-корзины. Полки-корзины – из сварной сетки толщиной прутка 4 мм. Размер ячеек 50х50 мм. Изделие устанавливается на 4 колёсные опоры, 2 из которых снабжены стопором. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.3)	1
Инструкция по эксплуатации	1
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	1

4. Транспортирование и хранение

4.1 Тележка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Тележка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения тележки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатома, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения тележки или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки тележки проверьте следующее:

- крепёжные элементы тележки выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации тележки

Во избежание преждевременного выхода из строя тележки не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях тележки, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности тележки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеназванных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тележки включает в себя:

- поддержание технического состояния тележки в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт тележки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность тележки.

9. Ремонт
Ремонт тележки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность тележки.

10. Утилизация
Тележка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тележка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Символы, наносимые на транспортную упаковку



Беречь от влаги



Хрупкое. Осторожно



Верх
Предел по количеству ярусов в штабеле

12. Свидетельство о приемке
Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.4) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.110 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код _____

№ партии _____


Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД
Изготовитель:
АО «Елатомский приборный завод»
Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатома, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13
E-mail: ipri@elamed.com
Сайт компании: ipri.elamed.com

Регистрационное удостоверение

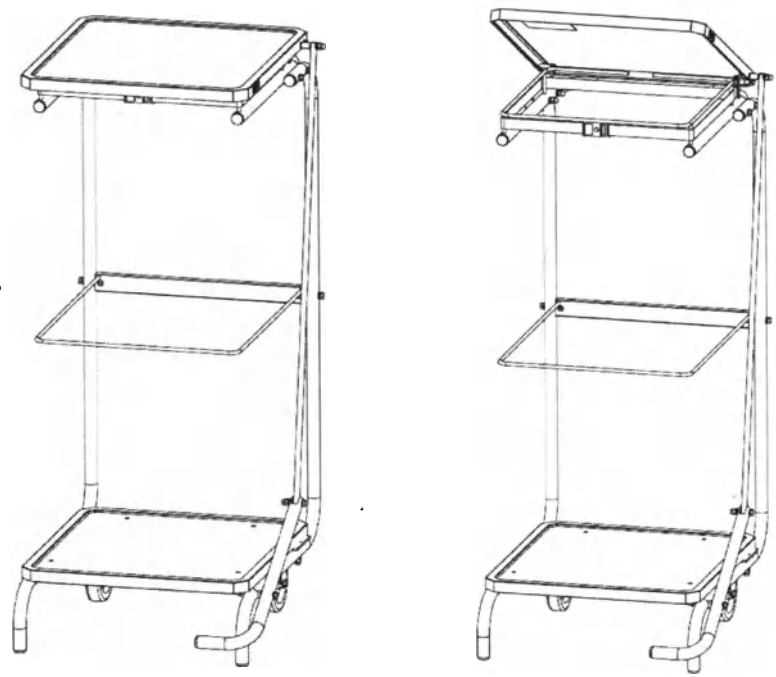

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.110 ТУ
вариант исполнения

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.4)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942814.104 РЭ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.4) (в дальнейшем - тележка), предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Противопоказания: не имеет.

Побочные эффекты: не выявлены.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование тележки может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части тележек не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация тележек проводится в резиновых перчатках !

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

...инструкцию по сборке, чтобы тележку без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: $11,2 \pm 1,12$ кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: $(550 \times 454 \times 1003) \pm 10\%$.

1.3 Внешние размеры полимерных полок (длина х ширина х высота) мм: верхняя, нижняя $(426 \times 397 \times 20) \pm 5$.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики полимерных полок при равномерном распределении нагрузки:

- на верхнюю полимерную полку – 10 кг;
- на нижнюю полимерную полку – 10 кг;
- предельный вес нагрузки на изделие (максимальная суммарная нагрузка) – 20 кг.

2.3 Тележка установлена на 2 опоры в виде труб и 2 колёсные опоры, без стопора, не регулируемые по высоте. Габаритные размеры колесных опор, мм, длина х ширина х высота - $(105 \times 50 \times 125) \pm 5$; диаметр, мм - 100 ± 2 , масса, кг: $(0,3 \pm 0,1)$. Максимальная допустимая нагрузка на одну опору, 70 даН.

2.4 Тележка имеет механическую регулировку подъёма верхней полимерной полки при помощи педального механизма. Угол между горизонталью и верхней полимерной полкой у тележки регулируется в пределах ($^{\circ}$): (от 0 до 55) ± 5 .

2.5 Максимальное усилие, прилагаемое к педальному механизму для изменения угла положения между горизонталью и верхней полимерной полкой 150 Н.

2.6 Полимерные полки тележки обеспечивают возможность размещения медицинских изделий и их устойчивое положение.

2.7 Конструкция тележки обеспечивает устойчивость к опрокидыванию при нагрузке 0,035 кН (35 Н) в продольном и поперечном направлении.

2.8 Максимальное усилие, необходимое для передвижения тележки на колёсных опорах 100 Н.

2.9 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием тележки должно быть 50 мм.

2.10 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола 2 ± 1 мм.

2.11 Максимальный шум при передвижении тележек 65 дБ на расстоянии 1 м.

2.12 Металлические и неметаллические неорганические покрытия тележек должны быть без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и должны соответствовать ГОСТ 9.301-86 для группы условий эксплуатации I по ГОСТ 15150-69.

2.13 При эксплуатации тележка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$; номинальное значение относительной влажности 80% при $+25^{\circ}\text{C}$.

2.14 Каркас изделия изготовлен из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием. В конструкции предусмотрены 2 не съёмные пластиковые полки, верхняя имеет возможность подъёма при помощи педального механизма на угол от 0° до 55° . Нижняя пластиковая полка несъёмная, возможности подъёма не имеет. Размещение каких-либо предметов на верхней пластиковой полке возможно только без передвижения тележки. В верхней части изделия имеется держатель. Ограничительная рамка в средней части изделия не предназначена для размещения на ней каких-либо предметов. Изделие устанавливается на 2 опоры в виде труб и на 2 неповоротные колёсные опоры, без стопора. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Четов (мод.4)	1
- Руководство по эксплуатации	1

- Инструкция по сборке

4. Транспортирование и хранение

4.1 Тележка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Тележка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха до 100% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$).

4.3 Условия хранения тележки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительная влажность не более 98% при $+25^{\circ}\text{C}$).

5. Дезинфекция

Поверхности тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения тележки или перевозки её в упаковке при температуре ниже $+10^{\circ}\text{C}$ изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки тележки проверьте следующее:

- крепёжные элементы тележки выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации тележки

Во избежание преждевременного выхода из строя тележки не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
- скопление жидкости на поверхностях тележки, в том числе и во время дезинфекции;
- подвергать поверхности тележки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тележки включает в себя:

- поддержание технического состояния тележки в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;
 - в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
- очистку от загрязнений поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

10. Утилизация

Тележка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тележка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Символы, наносимые на транспортную упаковку



Беречь от влаги



Хрупкое. Осторожно



Верх

Предел по количеству ярусов в штабеле

12. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.5) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.110 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13


E-mail: ipu@elamed.com

Сайт компании: ipu.elamed.com

Регистрационное удостоверение

ЕЛАМЕД

ЕЛАМЕД

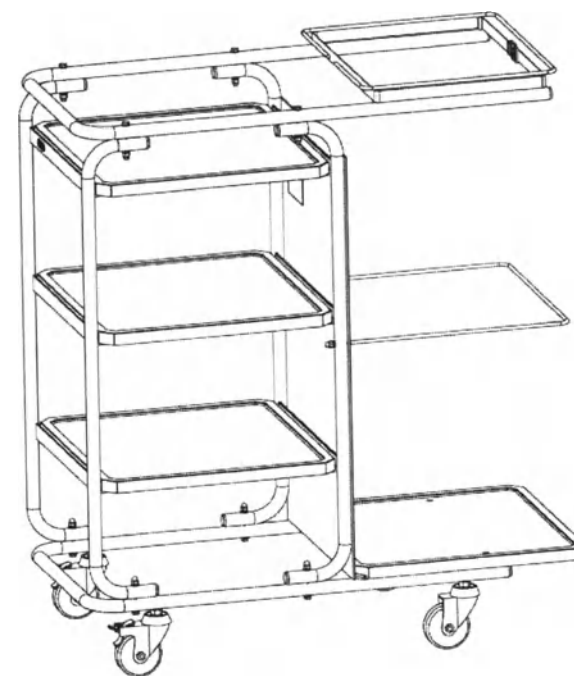

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.110 ТУ

вариант исполнения

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.5)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942814.105 РЭ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.5) (в дальнейшем - тележка), предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Противопоказания: не имеет.

Побочные эффекты: не выявлены.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование тележки может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части тележек не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация тележек проводится в резиновых перчатках!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

...перемещение тележки с включенным стопором колёс, что может привести к самопроизвольному откручиванию и неизбежной поломке ступицы.

Использовать тележку без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: 19,45±1,95 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (850х439х960)±10%.

1.3 Внешние размеры полимерных полок (длина х ширина х высота) мм: (426х397х20)±5.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики полимерных полок при равномерном распределении нагрузки:

- на полимерную полку – 10 кг;

- предельный вес нагрузки на изделие (максимальная суммарная нагрузка) – 40 кг.

2.3 Тележка установлена на 4 колёсные опоры, не регулируемые по высоте, 2 колеса снабжены стопором. Габаритные размеры колесных опор, мм, длина х ширина х высота - (110х50х105)±5; диаметр, мм - 75±2; масса, кг: 0,3±0,1. Максимальная допустимая нагрузка на одну опору, 45 даН.

2.4 Полимерные полки тележки обеспечивают возможность размещения медицинских изделий и их устойчивое положение.

2.5 Стопоры колёсных опор должны включаться при приложении на педаль максимального усилия 150 Н.

2.6 Максимальное усилие, необходимое для передвижения тележки на колёсных опорах 100 Н.

2.7 Максимальный шум при передвижении тележек 65 дБ на расстоянии 1 м.

2.8 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием тележки должно быть 50 мм.

2.9 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – 2±1 мм.

2.10 Конструкция тележки медицинской для процедурных кабинетов (мод.5) должна обеспечивать устойчивость к опрокидыванию при нагрузке 0,095 кН (95 Н) в продольном и поперечном направлении.

2.11 Металлические и неметаллические неорганические покрытия тележек должны быть без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и должны соответствовать ГОСТ 9.301-86 для группы условий эксплуатации I по ГОСТ 15150-69.

2.12 При эксплуатации тележка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.13 Каркас изделия изготовлен из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием. В конструкции предусмотрены 4 пластиковые полки, 3 из которых съёмные, нижняя пластиковая полка является несъёмной. В верхней части изделия имеется держатель. Ограничительная рамка в средней части изделия не предназначена для размещения на ней каких-либо предметов. Изделие устанавливается на 4 колёсные опоры, 2 из которых снабжены стопором. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия-изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.5)	1
- Руководство по эксплуатации	1
- Инструкция по сборке	1

4. Транспортирование и хранение

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU в виде в транспортной упаковке.

4.2 Тележка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения тележки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения тележки или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки тележки проверьте следующее:

- крепёжные элементы тележки выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации тележки

Во избежание преждевременного выхода из строя тележки не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях тележки, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности тележки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тележки включает в себя:

- поддержание технического состояния тележки в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт тележки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность тележки.

- б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;
- в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
- очистку от загрязнений поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт тележки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность тележки.

10. Утилизация

Тележка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тележка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Символы, наносимые на транспортную упаковку



Беречь от влаги



Хрупкое. Осторожно



Верх

Предел по количеству ярусов в штабеле

12. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.6) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.110ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipr@elamed.com

Сайт компании: ipr.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН

ЕЛАМЕД

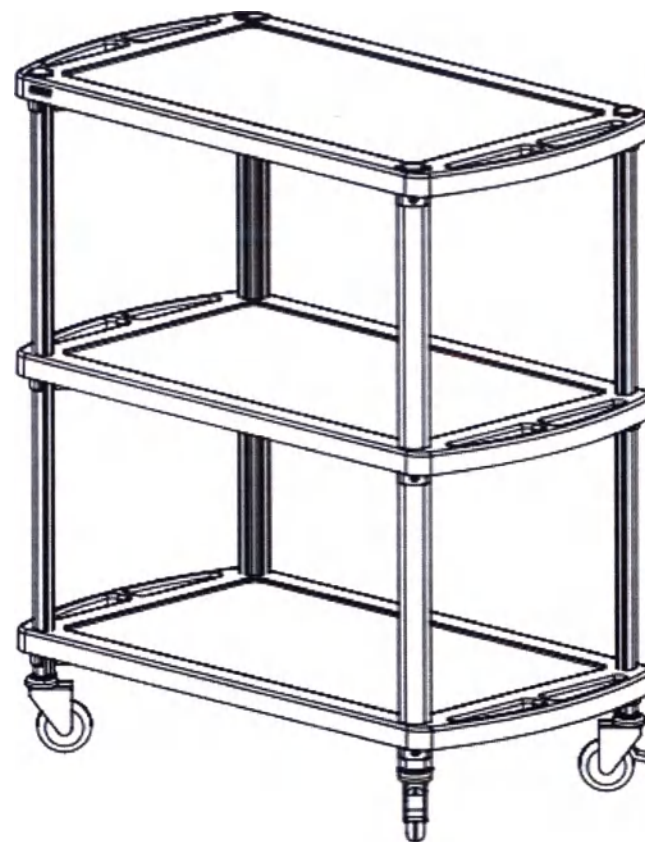

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.110ТУ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.6)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.123РЭ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.6) (в дальнейшем - тележка), предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах,

при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Противопоказания: не имеет.

Побочные эффекты: не выявлены.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование тележки может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части тележек не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация тележек проводится в резиновых перчатках !

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить передвижение тележки с включенным стопором колёс, что может привести к их самопроизвольному откручиванию и неизбежной поломке ступицы.

Использовать тележку без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: 10,2±1,0 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (849x450x948)±10%.

1.3 Внешние размеры полимерных полок (длина x ширина x высота) мм: (849x450x31)±5.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики полимерных полок при равномерном распределении нагрузки:

- на полимерную полку – 15 кг;

- предельный вес нагрузки на изделие (максимальная суммарная нагрузка) – 45 кг.

2.3 Полимерные полки тележки обеспечивают возможность размещения медицинских изделий и их устойчивое положение.

2.3 Тележка установлена на 4 колёсные опоры, не регулируемые по высоте, 2 колеса снабжены стопором. Габаритные размеры колесных опор, мм, длина x ширина x высота - (110x50x105)±5; диаметр, мм - 75±2; масса, кг: 0,3±0,1. Максимальная допустимая нагрузка на одну опору, 45 даН.

2.6 Стопоры колёсных опор должны включаться при приложении на педаль максимального усилия 150 Н.

2.7 Максимальное усилие, необходимое для передвижения тележки на колёсных опорах 100 Н.

2.8 Максимальный шум при передвижении тележек 65 дБ на расстоянии 1 м.

2.9 Конструкция тележки обеспечивает устойчивость к опрокидыванию при нагрузке 0,19 кН (190 Н) в продольном и 0,095 кН (95 Н) поперечном направлениях.

2.10 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием тележки должно быть 50 мм.

2.11 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола 2±1 мм.

2.12 Металлические и неметаллические неорганические покрытия тележек должны быть без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и должны соответствовать ГОСТ 9.301-86 для группы условий эксплуатации I по ГОСТ 15150-69

2.13 При эксплуатации тележка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.9 Каркас изделия изготовлен из алюминиевых профилей с порошковым покрытием. В конструкции предусмотрены три несъемных пластиковых полки. Изделие устанавливается на четыре колёсные опоры, две из которых снабжены стопором. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия.

Наименование	Количество, шт
Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.6)	1
- Руководство по эксплуатации	1
- Инструкция по сборке	1

4. Транспортирование и хранение

4.1 Тележка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Тележка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения тележки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения тележки или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки тележки проверьте следующее:

- крепёжные элементы тележки выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации тележки

Во избежание преждевременного выхода из строя тележки не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях тележки, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности тележки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тележки включает в себя:

- поддержание технического состояния тележки в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

9. Ремонт

Ремонт тележки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность тележки.

10. Утилизация

Тележка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тележка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Символы, наносимые на транспортную упаковку



Бережь от влаги



Верх



Предел по количеству ярусов в штабеле



Хрупкое. Осторожно

12. Свидетельство о приемке

Тележки медицинские ГИКС.942810.110ТУ	Примечание	Код
Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.7)	☐ Цвет белый	XXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXX

изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.110ТУ и годной для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13


E-mail: ipm@elamed.com

Сайт компании: ipm.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН

ЕЛАМЕД

ЕЛАМЕД

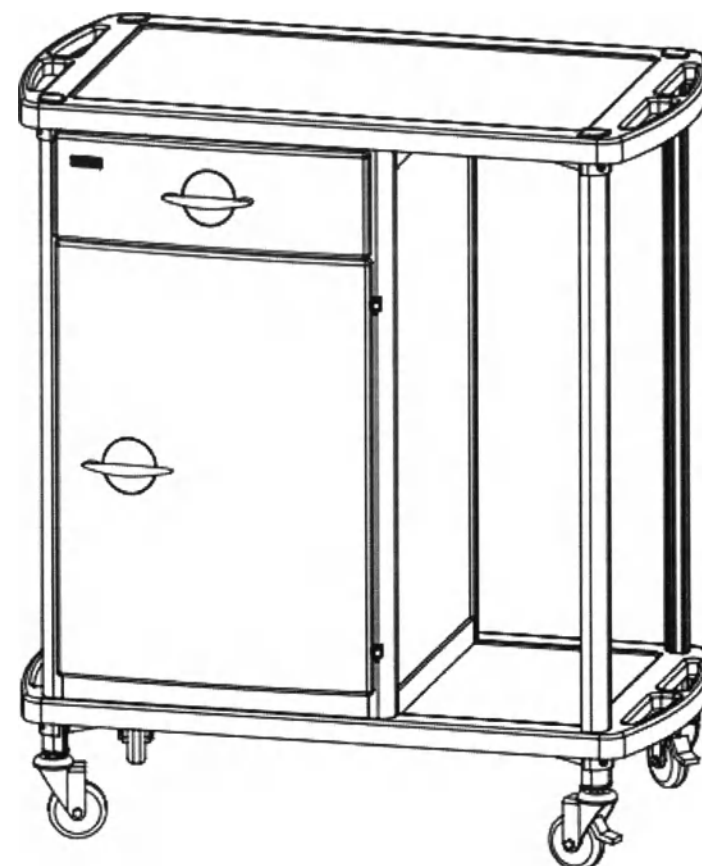

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.110ТУ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.7)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.131РЭ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.7) (в дальнейшем - тележка), предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах,

при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Противопоказания: не имеет.

Побочные эффекты: не выявлены.

Меры предосторожности:

Неадекватное использование тележки может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части тележек не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация тележек проводится в резиновых перчатках !

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить передвижение тележки с включенным стопором колёс, что может привести к их самопроизвольному откручиванию и неизбежной поломке ступицы.

Использовать тележку без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

Облокачиваться и надавливать на верхние грани выдвинутых ящиков.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: 15,1±1,5 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (849×490×948)±10%.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики полимерных полок при равномерном распределении нагрузки: открытую полимерную полку – 15 кг;

- на внутреннюю полимерную полку - 10 кг;

- на дно ящика полимерного - 7 кг.

- предельный вес нагрузки на изделие (максимальная суммарная нагрузка) – 47 кг.

2.3 Тележка установлена на 4 колёсные опоры, не регулируемые по высоте, 2 колеса снабжены стопором. Габаритные размеры колесных опор, мм, длина х ширина х высота - (110х50х105)±5; диаметр, мм - 75±2; масса, кг: 0,3±0,1. Максимальная допустимая нагрузка на одну опору, 45 даН.

2.4 Максимальное усилие для открывания и закрывания двери 3 даН. Минимальный угол открывания двери тележки 110°. Максимальное усилие выдвигания ящика 5 даН. Ящик имеет устройство для предотвращения его выпадения при выдвигании.

2.5 Конструкция тележки обеспечивает устойчивость к опрокидыванию при нагрузке 0,168 кН (168 Н) в продольном и 0,1 кН (100 Н) поперечном направлении.

2.6 Стопоры колёсных опор должны включаться при приложении на педаль максимального усилия 150 Н.

2.7 Максимальное усилие, необходимое для передвижения тележки на колёсных опорах 100 Н.

2.8 Максимальный шум при передвижении тележек 65 дБ на расстоянии 1 м.

2.9 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием тележки должно быть 50 мм.

2.10 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола –

2±1 мм.

2.11 Металлические и неметаллические неорганические покрытия тележек должны быть без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и должны соответствовать ГОСТ 9.301-86 для групп условий эксплуатации I по ГОСТ 15150-69.

2.12 При эксплуатации тележка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.13 Каркас изделия изготовлен из алюминиевых профилей с порошковым покрытием. Под верхней несъемной пластиковой полкой, также выполняющей функцию столешницы, расположен пластиковый выдвижной ящик. Под ним - секция, закрывающаяся пластиковой дверью. В секции установлена съемная пластиковая полка. Изделие устанавливается на четыре колёсные опоры, две из которых снабжены стопором. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия - изготовителя.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование

Количество, шт

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.7)	1
- Руководство по эксплуатации	1
- Инструкция по сборке	1
Примечание: фасады по требованию заказчика могут быть изготовлены в белом, желтом, оранжевом, зеленом, синем или фиолетовом цвете	

4. Транспортирование и хранение

4.1 Тележка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Тележка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения тележки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения тележки или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки тележки проверьте следующее:

- крепёжные элементы тележки выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации тележки

Во избежание преждевременного выхода из строя тележки не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях тележки, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности тележки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности и.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тележки включает в себя:

- поддержание технического состояния тележки в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

- б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;
- в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
- очистку от загрязнений поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
- дезинфекцию поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт тележки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность тележки.

10. Утилизация

Тележка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тележка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Символы, наносимые на транспортную упаковку



Беречь от влаги



Хрупкое. Осторожно



Верх

Предел по количеству ярусов в штабеле

12. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.8) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.110ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13


E-mail: ipri@elamed.com

Сайт компании: ipri.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН

ЕЛАМЕД

ЕЛАМЕД

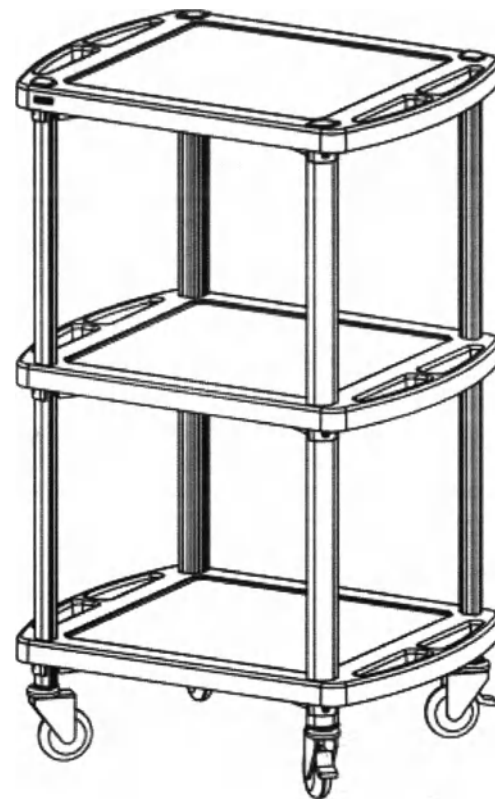

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.110ТУ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.8)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.141РЭ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.8) (в дальнейшем - тележка), предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

2023 г.
Применение: для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операций при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Противопоказания: не имеет.

Побочные эффекты: не выявлены.

Меры предосторожности:

Ненадлежащее использование тележки может привести к её повреждению и травмам пациентов или персонала.

! Составные части тележек не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация тележек проводится в резиновых перчатках !

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить передвижение тележки с включенным стопором колёс, что может привести к их самопроизвольному откручиванию и неизбежной поломке ступицы.

Использовать тележку без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: $7,5 \pm 0,8$ кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: $(580 \times 450 \times 945) \pm 10$.

1.3 Внешние размеры полимерных полок (длина x ширина x высота) мм: $(580 \times 450 \times 31) \pm 5$.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики полимерных полок при равномерном распределении нагрузки:

- на полимерную полку – 15 кг;

- предельный вес нагрузки на изделие (максимальная суммарная нагрузка) – 45 кг.

2.3 Полимерные полки тележки обеспечивают возможность размещения медицинских изделий и их устойчивое положение.

2.4 Тележка установлена на 4 колёсные опоры диаметром 75 мм, не регулируемые по высоте, 2 колеса снабжены стопором. Габаритные размеры колесных опор, мм, длина x ширина x высота - $(110 \times 50 \times 105) \pm 5$; диаметр, мм - 75 ± 2 ; масса, кг: $0,3 \pm 0,1$. Максимальная допустимая нагрузка на одну опору, 45 даН.

2.5 Конструкция тележки обеспечивает устойчивость к опрокидыванию при нагрузке 0,105 кН (105 Н) в продольном и 0,089 кН (89 Н) поперечном направлении.

2.6 Стопоры колёсных опор должны включаться при приложении на педаль максимального усилия 150 Н.

2.7 Максимальное усилие, необходимое для передвижения тележки на колёсных опорах 100 Н.

2.8 Максимальный шум при передвижении тележек 65 дБ на расстоянии 1 м.

2.9 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием тележки должно быть 50 мм.

2.10 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – 2 ± 1 мм.

2.11 Металлические и неметаллические неорганические покрытия тележек должны быть без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и должны соответствовать ГОСТ 9.301-86 для группы условий эксплуатации I по ГОСТ 15150-69.

2.12 При эксплуатации тележка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от $+10^\circ\text{C}$ до $+35^\circ\text{C}$; номинальное значение относительной влажности 80% при $+25^\circ\text{C}$.

2.13 Каркас изделия изготовлен из алюминиевых профилей с порошковым покрытием. В конструкции предусмотрены три несъемных пластиковых полки. Изделие устанавливается на

стопором. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями

предприятия - изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.8)	1
- Руководство по эксплуатации	1
- Инструкция по сборке	1

4. Транспортирование и хранение

4.1 Тележка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Тележка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до $+50^\circ\text{C}$, относительной влажности воздуха до 100% при температуре $+25^\circ\text{C}$).

4.3 Условия хранения тележки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до $+40^\circ\text{C}$ и относительная влажность не более 98% при $+25^\circ\text{C}$).

5. Дезинфекция

Поверхности тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждениях составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения тележки или перевозки её в упаковке при температуре ниже $+10^\circ\text{C}$ изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки тележки проверьте следующее:

- крепёжные элементы тележки выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации тележки

Во избежание преждевременного выхода из строя тележки не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях тележки, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности тележки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тележки включает в себя:

- поддержание технического состояния тележки в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

9. Ремонт

Ремонт тележки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность тележки.

10. Утилизация

Тележка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тележка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Символы, наносимые на транспортную упаковку



Беречь от влаги



Хрупкое. Осторожно



Верх



Предел по количеству ярусов в штабеле

12. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.9) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.110ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Косимовский район, р.п. Елатома, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13


E-mail: lpu@elamed.com

Сайт компании: lpu.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН

ЕЛАМЕД

ЕЛАМЕД

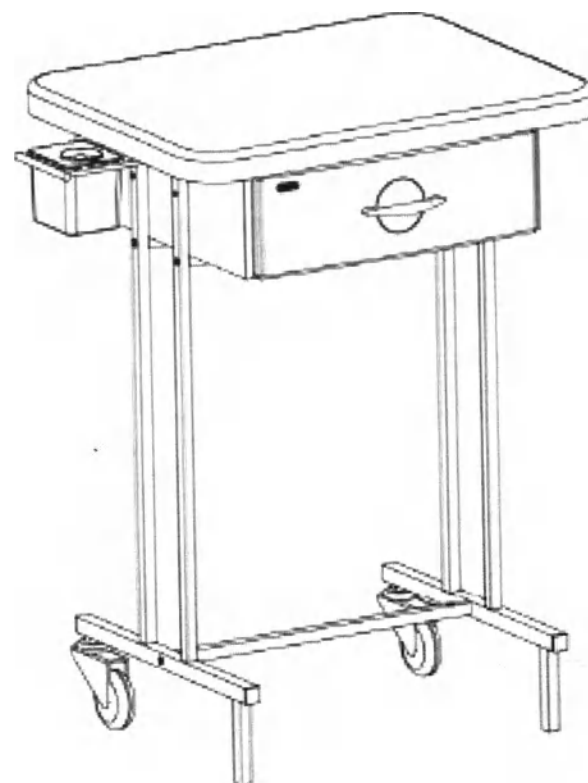

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.110ТУ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.9)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИКС.942818.148РЭ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.9) (в дальнейшем - тележка), предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Противопоказания: не имеет.

Побочные эффекты: не выявлены.

2023 г.
Внимание! Неосторожное использование тележки может привести к её повреждению и травмам персонала.

! Составные части тележек не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация тележек проводится в резиновых перчатках!

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Использовать тележку без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: 12±1,2 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (697×485×830)±10%.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики при равномерном распределении нагрузки:

- 15 кг на столешницу;

- 7 кг - на дно ящика полимерного;

- 1 кг - на навесную емкость.

- предельный вес нагрузки на изделие (максимальная суммарная нагрузка) – 23 кг.

2.3 Тележка установлена на 2 опоры в виде труб и 2 колёсные опоры, без стопора, не регулируемые по высоте. Габаритные размеры колесных опор, мм, длина x ширина x высота - (110x50x105)±5; диаметр, мм - 75±2; масса, кг: 0,3±0,1. Максимальная допустимая нагрузка на одну опору, 45 даН.

2.4 Максимальное усилие выдвигания ящика должно быть 5 даН. Ящик имеет устройство для предотвращения его выпадения при выдвигании.

2.5 Конструкция тележки обеспечивает устойчивость к опрокидыванию при нагрузке 0,071 кН (71 Н) в продольном и 0,0995 кН (99,5 Н) поперечном направлении.

2.6 Максимальное усилие, необходимое для передвижения тележки на колёсных опорах 100 Н.

2.7 Максимальный шум при передвижении тележек 65 дБ на расстоянии 1 м.

2.8 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием тележки должно быть 50 мм.

2.9 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – 2±1 мм.

2.10 Металлические и неметаллические неорганические покрытия тележек должны быть без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и должны соответствовать ГОСТ 9.301-86 для группы условий эксплуатации I по ГОСТ 15150-69.

2.11 При эксплуатации тележка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.12 Каркас изделия изготовлен из стальных труб, покрытых полиэфирной порошковой краской. Под верхней несъемной полкой из ЛДСП, на которую уложен слой поролона толщиной 20мм и обтянута винилскожей, также выполняющей функцию столешницы, расположен пластиковый выдвижной ящик. С правого и левого торцов расположены выдвижные рамы под емкость для сбора отходов. Изделие установлено на 2 опоры в виде труб и 2 колёсные опоры, без стопора, не регулируемые по высоте. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия - изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
Тележка для сбора отходов (мод.9)	1
000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Справка для сбора отходов одноразовая ЕСО-02-«ЕЛАТ»-01 по ГИКС.943129.104-02 (РУ №	1

ФСР 2011/10609)	
- Руководство по эксплуатации	1
- Инструкция по сборке	1

4. Транспортирование и хранение

4.1 Тележка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Тележка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения тележки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения тележки или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки тележки проверьте следующее:

- крепёжные элементы тележки выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации тележки

Во избежание преждевременного выхода из строя тележки не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях тележки, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности тележки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тележки включает в себя:

- поддержание технического состояния тележки в виде:

а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;

б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;

в) протяжки всей крепёжной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;

- очистку от загрязнений поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тележки включает в себя:

- поддержание технического состояния тележки в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;
 - в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
- очистку от загрязнений поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);

- дезинфекцию поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.

9. Ремонт

Ремонт тележки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройства, обеспечивающих полную функциональность тележки.

10. Утилизация

Тележка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тележка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Символы, наносимые на транспортную упаковку



Бережь от влаги



Хрупкое. Осторожно



Верх



Предел по количеству ярусов в штабеле

12. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.10) изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.110ТУ и признана годной для эксплуатации.

Код

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,

Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25


Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13

E-mail: ipri@elamed.com

Сайт компании: ipri.elamed.com

△ ЕЛАМЕД

△ ЕЛАМЕД

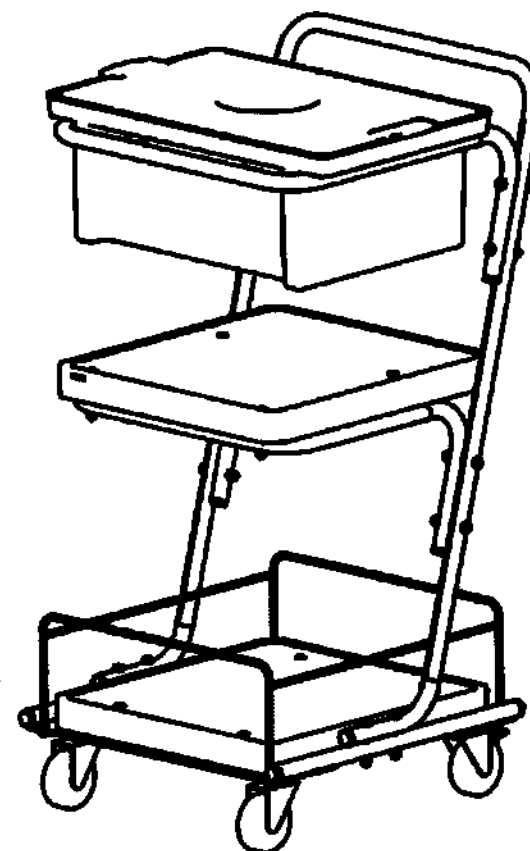

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.110ТУ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.10)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.147РЭ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.10) (в дальнейшем - тележка), предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах,

при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Противопоказания: не имеет.

Побочные эффекты: не выявлены.

Меры предосторожности:

Неадекватное использование тележки может привести к её повреждению и травмам персонала.

! Составные части тележек не имеют контакта с организмом человека.

Эксплуатация тележек проводится в резиновых перчатках !

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить передвижение тележки с включенным стопором колёс, что может привести к их самопроизвольному откручиванию и неизбежной поломке ступицы.

Использовать тележку без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

1. Основные параметры и размеры

1.1 Масса изделия: 16,5±1,6 кг.

1.2 Габаритные размеры (длина x ширина x высота) мм: (523×468×965)±10%.

2. Характеристики

2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.

2.2 Нагрузочные характеристики полимерных полок при равномерном распределении нагрузки:

- на полимерную полку – 10 кг;

- на навесную емкость – 10 кг;

- предельный вес нагрузки на изделие (максимальная суммарная нагрузка) – 30 кг.

2.3 Тележка установлена на 4 колёсные опоры, не регулируемые по высоте, 2 колеса снабжены стопором. Габаритные размеры колесных опор, мм, длина x ширина x высота - (110x50x105)±5; диаметр, мм - 75±2; масса, кг: 0,3±0,1. Максимальная допустимая нагрузка на одну опору, 45 даН.

2.4 Конструкция тележки обеспечивает устойчивость к опрокидыванию при нагрузке 0,0583 кН (58,3 Н) в продольном и 0,0781 кН (78,1 Н) поперечном направлении

2.5 Стопоры колёсных опор должны включаться при приложении на педаль максимального усилия 150 Н.

2.6 Максимальное усилие, необходимое для передвижения тележки на колёсных опорах 100 Н.

2.7 Максимальный шум при передвижении тележек 65 дБ на расстоянии 1 м.

2.8 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием тележки должно быть 50 мм.

2.9 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – 2±1 мм.

2.10 Металлические и неметаллические неорганические покрытия тележек должны быть без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и должны соответствовать ГОСТ 9.301-86 для группы условий эксплуатации I по ГОСТ 15150-69.

2.11 При эксплуатации тележка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.

2.12 Каркас изделия изготовлен из стальных труб, покрытых полиэфирной порошковой краской. В конструкции предусмотрены два держателя (рамы). В верхний держатель установлен контейнер для дезинфекции и предстерилизационной обработки. На нижний держатель и шасси установлены две несъемные пластиковые полки. Нижняя полка защищена ограждением. Изделие устанавливается на четыре колёсные опоры, две из которых снабжены стопором. Изделие по-

с ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия - изготовителя.

3. Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.10)	1
- Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий ЕДПО-10-01 по ТУ 9451-001-24320270-99 (ПУ № ФСР 2009/05373)	1
- Руководство по эксплуатации	1
- Инструкция по сборке	1

4. Транспортирование и хранение

4.1 Тележка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.

4.2 Тележка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).

4.3 Условия хранения тележки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).

5. Дезинфекция

Поверхности тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.

6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при повреждении составных частей изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод».

Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.1 Подготовка к работе:

6.1.1 После хранения тележки или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 30 мин.

6.1.2 После сборки тележки проверьте следующее:

- крепёжные элементы тележки выполняют свое функциональное назначение.

6.2 Ограничения в процессе эксплуатации тележки

Во избежание преждевременного выхода из строя тележки не допускается:

- нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;

- скопление жидкости на поверхностях тележки, в том числе и во время дезинфекции;

- подвергать поверхности тележки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.

7. Гарантия изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.

7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковывания.

9. Ремонт

Ремонт тележки включает в себя замену пришедших в негодность деталей либо узлов, если они не выполняют функции устройств, обеспечивающих полную функциональность тележки.

10. Утилизация

Тележка, потерявшая потребительские свойства, подлежит утилизации в виде эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам. Сбор, временное хранение и вывоз этих отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, где использовалась тележка по правилам, предусмотренным в СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса «А».

11. Символы, наносимые на транспортную упаковку



Беречь от влаги



Верх



Хрупкое. Осторожно



Предел по количеству ярусов в штабеле

12. Свидетельство о приемке

	Примечание	Код
Тележки медицинские ГИКС.942810.110ТУ		
Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.11)	☐ Цвет белый	XXXXX
	☐ Цвет желтый	XXXXX
	☐ Цвет оранжевый	XXXXX
	☐ Цвет зеленый	XXXXX
	☐ Цвет синий	XXXXX
	☐ Цвет фиолетовый	XXXXX

изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ГИКС.942810.110ТУ и признана годной для эксплуатации.

№ партии _____

Штамп ОТК _____

Дата упаковки _____

Компания ЕЛАМЕД

Изготовитель:

АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: 391351, Россия, Рязанская область,
Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13


E-mail: lrp@elamed.com

Сайт компании: lrp.elamed.com

Регистрационное удостоверение № РЗН

ЕЛАМЕД

ЕЛАМЕД

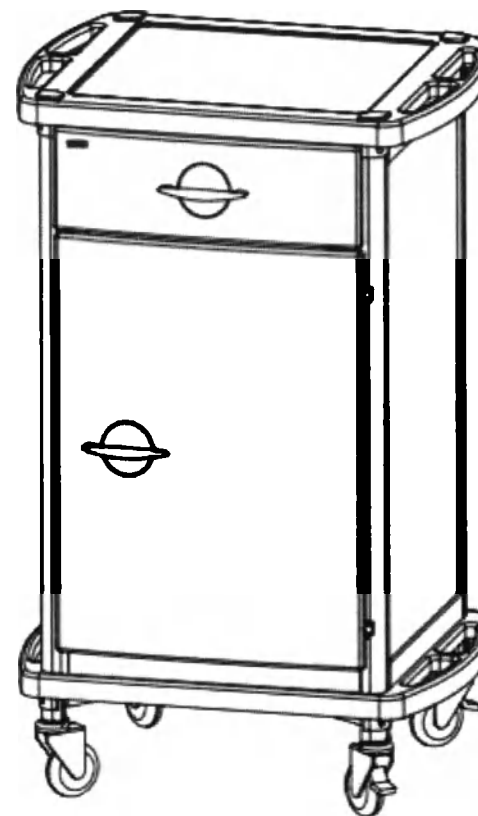

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ГИКС.942810.110ТУ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.11)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИКС.942818.151РЭ

Тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.11) (в дальнейшем - тележка), предназначена для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операционных при осуществлении различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение, диагностику, реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.

Показания к применению: для транспортировки, размещения медицинских изделий, лекарственных средств, медицинского оборудования в смотровых и процедурных кабинетах, операци-

...23г.
...различных видов медицинской деятельности, направленной на лечение,
...реабилитацию заболеваний и мониторинг состояния организма пациента.
Противопоказания: не имеет.
Побочные эффекты: не выявлены.
Меры предосторожности:
Ненадлежащее использование тележки может привести к её повреждению и травмам пациента или персонала.

! Составные части тележек не имеют контакта с организмом человека.
! Эксплуатация тележек проводится в резиновых перчатках !
! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Производить передвижение тележки с включенным стопором колёс, что может привести к их самопроизвольному откручиванию и неизбежной поломке ступицы.
Использовать тележку без проверки на прочность фиксации её компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.
Облокачиваться и надавливать на верхние грани выдвинутых ящиков.

1. Основные параметры и размеры
 - 1.1 Масса изделия: 14,1±1,4 кг.
 - 1.2 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) мм: (580×490×945)±10%.
2. Характеристики
 - 2.1 Календарный срок службы изделия – 5 лет от начала эксплуатации до достижения предельного состояния. Критерий предельного состояния – невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления изделия.
 - 2.2 Нагрузочные характеристики полимерных полок при равномерном распределении нагрузки:
 - на открытую полимерную полку – 15 кг;
 - на внутреннюю полимерную полку – 10 кг;
 - на дно ящика полимерного – 7 кг.
 - 2.3 Тележка установлена на 4 колёсные опоры, не регулируемые по высоте, 2 колеса снабжены стопором. Габаритные размеры колесных опор, мм, длина х ширина х высота - (110×50×105)±5; диаметр, мм - 75±2; масса, кг: 0,3±0,1. Максимальная допустимая нагрузка на одну опору, 45 даН.
 - 2.4 Максимальное усилие для открывания и закрывания двери 3 даН. Минимальный угол открывания двери 110°. Максимальное усилие выдвигания ящика 5 даН. Ящик имеет устройство для предотвращения его выпадения при выдвигании.
 - 2.5 Конструкция тележки обеспечивает устойчивость к опрокидыванию при нагрузке 0,106 кН (106 Н) в продольном и 0,102 кН (102 Н) поперечном направлении.
 - 2.6 Стопоры колёсных опор должны включаться при приложении на педаль максимального усилия 150 Н.
 - 2.7 Максимальное усилие, необходимое для передвижения тележки на колёсных опорах 100 Н.
 - 2.8 Максимальный шум при передвижении тележек 65 дБ на расстоянии 1 м.
 - 2.9 Минимальное расстояние между горизонтальной плоскостью пола и основанием тележки должно быть 50 мм.
 - 2.10 Зазор между одной из опор в виде колеса и горизонтальной плоскостью пола – 2±1 мм.
 - 2.11 Металлические и неметаллические неорганические покрытия тележек должны быть без трещин, пузырей, включений, отслаиваний и должны соответствовать ГОСТ 9.301-86 для группы условий эксплуатации I по ГОСТ 15150-69.
 - 2.12 При эксплуатации тележка устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-2020 для исполнения УХЛ категории 4.2: температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C; номинальное значение относительной влажности 80% при +25°C.
 - 2.13 Каркас изделия изготовлен из алюминиевых профилей с порошковым покрытием. Под верхней несъемной пластиковой полкой, также выполняющей функцию столешницы, расположен пластиковый выдвижной ящик. Под ним - секция, закрываемая пластиковой дверью. В секции установлена съемная пластиковая полка. Изделие устанавливается на четыре колёсные опоры, две из которых снабжены стопором. Изделие поставляется в разобранном виде, сборка осуществляется в соответствии с инструкцией по сборке представителями предприятия - изготовителя.

3. Комплект поставки	
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 1 тележка медицинская для процедурных кабинетов (мод.11)	Количество, шт 1

- Руководство по эксплуатации	1
- Инструкция по сборке	1

Примечание: фасады по требованию заказчика могут быть изготовлены в белом, желтом, оранжевом, зеленом, синем или фиолетовом цвете

4. Транспортирование и хранение
 - 4.1 Тележка транспортируется в разобранном виде в транспортной упаковке.
 - 4.2 Тележка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25°C).
 - 4.3 Условия хранения тележки в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от -50°C до +40°C и относительная влажность не более 98% при +25°C).
5. Дезинфекция

Поверхности тележки устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего раствора типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 и 1% раствора хлорамина по ТУ 9392-031-00203306-2003.
6. Правила эксплуатации

ВНИМАНИЕ!!! В случаях появления сомнения в исправности или правильной работе изделия, при поврежденных составных частях изделия обратитесь к предприятию-изготовителю по адресу: 391351, Россия, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина. 25, АО «Елатомский приборный завод».
Дополнительную информацию можно получить по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-350-06-13.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

 - 6.1 Подготовка к работе:
 - 6.1.1 После хранения тележки или перевозки её в упаковке при температуре ниже +10°C изделие необходимо выдерживать при комнатной температуре не менее 30 мин.
 - 6.1.2 После сборки тележки проверьте следующее:
 - крепежные элементы тележки выполняют свое функциональное назначение.
 - 6.2 Ограничения в процессе эксплуатации тележки

Во избежание преждевременного выхода из строя тележки не допускается:

 - нагружать рабочие поверхности выше норм, установленных в п. 2.2;
 - скопление жидкости на поверхностях тележки, в том числе и во время дезинфекции;
 - подвергать поверхности тележки воздействию предметов, вызывающих появление царапин на рабочей поверхности.
 7. Гарантия изготовителя
 - 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативной документации при условии сборки мебели представителем предприятия-изготовителя, соблюдения потребителем вышеизложенных правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
 - 7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня сборки мебели представителем предприятия-изготовителя.
 - 7.3 Гарантийный срок хранения – 60 месяцев с даты упаковки.
 8. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание тележки включает в себя:

 - поддержание технического состояния тележки в виде:
 - а) визуального осмотра всей конструкции изделия не реже одного раза в месяц;
 - б) протяжки винтов (при наличии) не реже одного раза в месяц;
 - в) протяжки всей крепежной фурнитуры конструкции не реже одного раза в 6 месяцев;
 - г) очистку от загрязнений поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в воде (при необходимости);
 - д) дезинфекцию поверхностей тележки путём протирания ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства с периодичностью, регламентированной утвержденным внутренним порядком проведения санитарной обработки в медицинской организации, в помещениях которой размещено изделие.



Директор по развитию АО «ЕПЗ»

Никитина Т.Н.

2023