

ООО «Айболит-2000»
Производство медицинской мебели



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(Эксплуатационная документация)

Шкаф для хранения лекарственных средств

по ТУ 32.50.30-030-51768895-2023

Версия № 1.0

ШДЛ1.152016.001 РЭ

г. Нижний Новгород
2023

1. Наименование медицинского изделия

Шкаф для хранения лекарственных средств по ТУ 32.50.30-030-51768895-2023 (Далее – изделие, шкаф).

2. Назначение. Общая информация.

— Шкаф для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

— **Варианты исполнения изделия:**

1. Шкаф для хранения лекарственных средств ШМК-1.1М
2. Шкаф для хранения лекарственных средств ШМК-1.1В
3. Шкаф для хранения лекарственных средств ШМК-1.2М
4. Шкаф для хранения лекарственных средств ШМК-1.2В
5. Шкаф для хранения лекарственных средств ШМК-2.1М
6. Шкаф для хранения лекарственных средств ШМК-2.1В
7. Шкаф для хранения лекарственных средств ШМК-2.2М
8. Шкаф для хранения лекарственных средств ШМК-2.2В
9. Шкаф для хранения лекарственных средств ШМН-1.1М
10. Шкаф для хранения лекарственных средств ШМН-1.1В
11. Шкаф для хранения лекарственных средств ШМН-1.2М
12. Шкаф для хранения лекарственных средств ШМН-1.2В
13. Шкаф для хранения лекарственных средств ШМН-2.1М
14. Шкаф для хранения лекарственных средств ШМН-2.1В

- 15.Шкаф для хранения лекарственных средств ШМН-2.2М
- 16.Шкаф для хранения лекарственных средств ШМН-2.2В
- 17.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-1.1
- 18.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-1.2
- 19.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-1.3
- 20.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-1.4
- 21.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-1.5
- 22.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-1.6
- 23.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-1.7
- 24.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-1.8
- 25.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-1.9
- 26.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-1.10
- 27.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-10
- 28.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-11
- 29.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-12
- 30.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-13
- 31.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-14
- 32.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-15
- 33.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-16
- 34.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-17
- 35.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-18
- 36.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-19
- 37.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш 1.01
- 38.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш 1.02
- 39.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш 1.03
- 40.Шкаф для хранения лекарственных средств МКП 014
- 41.Шкаф для хранения лекарственных средств МКП 014/01
- 42.Шкаф для хранения лекарственных средств МКП 014/02
- 43.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-2.1
- 44.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-2.2
- 45.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-2.3
- 46.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-2.4
- 47.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-2.5
- 48.Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-2.6
- 49.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-20
- 50.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-21
- 51.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-22
- 52.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-23
- 53.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-24
- 54.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-25
- 55.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-26
- 56.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-27
- 57.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-28
- 58.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-29
- 59.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-30
- 60.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-31
- 61.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-32
- 62.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-33
- 63.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-34
- 64.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш 2.01
- 65.Шкаф для хранения лекарственных средств Ш 2.02

66. Шкаф для хранения лекарственных средств Ш 2.03
67. Шкаф для хранения лекарственных средств МКП 013
68. Шкаф для хранения лекарственных средств МКП 013/01
69. Шкаф для хранения лекарственных средств МКП 013/02
70. Шкаф для хранения лекарственных средств №6
71. Шкаф для хранения лекарственных средств №8
72. Шкаф для хранения лекарственных средств №8 с/н/с
73. Шкаф для хранения лекарственных средств №8 п/н/с
74. Шкаф для хранения лекарственных средств №18
75. Шкаф для хранения лекарственных средств №18 с/н/с
76. Шкаф для хранения лекарственных средств №22
77. Шкаф для хранения лекарственных средств №22 с/н/с
78. Шкаф для хранения лекарственных средств №28
79. Шкаф для хранения лекарственных средств №28 с/н/с
80. Шкаф для хранения лекарственных средств №28 п/н/с

Область применения:

Процедурные кабинеты, кабинеты диагностики и другие специальные медицинские помещения в медицинских учреждениях.

Показания к применению:

Размещение и хранение лекарственных средств, стерильных расходных материалов, медицинских инструментов и прочих изделий медицинского назначения, для проведения медицинских процедур и манипуляций.

— **Пользователи:** Шкаф предназначен для использования квалифицированным медицинским и лабораторным персоналом в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

— **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость материала.

— **Побочные эффекты:** не выявлены.

— **Класс в зависимости от потенциального риска применения** – 1 в соответствии с приказом от 6 июня 2012 г. №4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий».

— **Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией** – 139690 согласно Приказу Минздрава России №4н от 6 июня 2012 г.

— **Вид климатического исполнения изделия** – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

— **Классификация в соответствии с ГОСТ 10993-1** по продолжительности контакта - категория А, по виду контакта - контакт с кожей.

— **Пример обозначения изделия при заказе и в других документах:**

— «Шкаф для хранения лекарственных средств ШК-1.1» по ТУ 32.50.30-030-51768895-2023.

— **Пример сокращённого наименования:** «ШК-1.1».

3. Маркировка

3.1. Маркировка - по ГОСТ Р 50444 и 14192.

3.2. На каждом изделии прикреплена идентификационная наклейка, на которой указаны:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, адрес предприятия-изготовителя
- наименование изделия (модели)
- заводской номер
- номер и дата РУ
- обозначение настоящих технических условий
- гарантийный срок эксплуатации
- гарантийный срок хранения
- средний срок службы
- символ «Обратитесь к инструкции по применению» и «Запрещено утилизировать с бытовым мусором»

3.3. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192. Маркировка содержит:

— наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- наименование изделия (модели);
- дату изготовления;
- заводской номер;
- обозначение настоящих технических условий;
- условия хранения и транспортирования;
- комплект поставки;
- номер и дату РУ;
- количество пакетов.
- цвет корпуса/цвет фасада
- фотографическое изображение

3.4. Потребительская (транспортная) маркировка нанесена на бумажные или картонные ярлыки, или непосредственно на упаковку, ярлыки прикрепляют к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

На потребительскую (транспортную) упаковку нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Беречь от влаги». Знаки «Верх», «Хрупкое, обращаться осторожно» наносятся при необходимости. «Хрупкое, обращаться осторожно» - при наличии хрупких деталей, «Верх» - если изделие нельзя переворачивать.

3.5. Используемые символы маркировки и расшифровка представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Расшифровка символов

Символ	Толкование
	Обратитесь к инструкции по применению
	Верх
	Беречь от влаги
	Запрещено утилизировать с бытовым мусором
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Товарный знак предприятия-изготовителя

4. Упаковка

4.1. Для транспортирования изделия упакованы согласно таблице 2.

Таблица 2

Название пакета, его номер	Материал для упаковки	Производитель
Пакет №1, 2,3 и т.д.	Пленка полиэтиленовая марки «Н» ГОСТ 10354-82, толщина пленки 60 мкм, размер 1,5 м рукав x 100 м	ООО «НИЖПОЛИМЕРУПАК» г. Дзержинск
	Картон гофрированный Марка Т23 Профиль С размер листа 1200x2200 мм, ТУ 17.21.11-003-01304831-2018 из гофрированного картона по ГОСТ 7376	ООО «Нижкартон» г. Н. Новгород
	Лента клейкая ВОРР (скотч) ТУ 2293-001-48009358-2007, толщина 45 мкм, ширина ленты 48 мм, длина 66 м	ООО «Т.С.Н.» г. Санкт-Петербург

5. Охрана окружающей среды

5.1 Изделие при испытаниях, транспортировании, хранении и эксплуатации не наносит вреда окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека.

5.2 При соблюдении указаний к применению и утилизации изделие не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

5.3 Отходы, образующиеся после применения изделия по назначению, установленному производителем, а также использованные изделия подлежат утилизации в соответствии с п. 11.

6. Сырье, материалы и покупные изделия

6.1. При производстве изделия применяются сырье и материалы, имеющие сопроводительные документы о качестве предприятия-производителя.

6.2. Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве изделия, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297.

6.3.. Материалы, применяемые для изготовления изделия, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали при нормальной эксплуатации.

7. Указания к применению

7.1. Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещений при следующих климатических условиях: при температуре воздуха от плюс 10°C до плюс 35°C, относительной влажности до 80%, при температуре 25°C.

7.2. Запрещается вставать или садиться на изделие.

7.3. При закрывании дверки или задвигании ящика необходимо соблюдать осторожность во избежание защемления рук.

7.4. Меры предосторожности при обнаружении неисправностей (например, потрескивание горизонтальных поверхностей, опор) и/или механических повреждений частей изделия, способность снизить устойчивость к нагружению, устойчивости изделия, падению или опрокидыванию, необходимо освободить шкаф от нагрузки к обратиться к предприятию-изготовителю.

8. Техническое обслуживание

Сборка изделия производится специалистами сервисной службы предприятия-производителя. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений - 1 раз в месяц. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

Не допускается:

- механическая чистка с использованием абразивных, хлоросодержащих и кислотных средств;
- использование металлических щеток, жестких губок при очистке;
- длительный контакт с ржавыми предметами;
- умышленно царапать поверхность.

Ремонт изделия производится обученными специалистами предприятия-производителя или специалистами сервисной службы предприятия-изготовителя. Категорически запрещается разбирать изделие без представителя предприятия-изготовителя. Послегарантийное обслуживание и ремонт изделия, должны производиться на предприятии-изготовителе.

9. Транспортирование и хранение

9.1. Условия транспортирования изделий - по условиям хранения 5 ГОСТ 15150 - при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.

9.2. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя храниться в крытых отапливаемых помещениях отправителя (получателя) при температуре от плюс 5 °C до плюс 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %.

10. Гарантии изготовителя

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего руководства по эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия -12 месяцев со дня продажи.

10.3. Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев со дня изготовления.

11. Утилизация

11.1. Утилизация проводится по правилам, установленным СанПиН 2.1.3684-21.

11.2. Утилизировать использованное изделие и упаковочные материалы в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 как отходы класса А (эпидемиологические безопасные отходы, по составу приближенные к твердым коммунальным отходам).

12. Адрес изготовителя:

Россия, 603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7 Г

ООО «Айболит-2000» Тел/факс (831)417-89-98

E-mail: info@aybolit2000.ru, Приложение: №1 - 42 на 121 листах.

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств в исполнениях: ШМК-1.1М, ШМК-1.1В, ШМК-1.2М, ШМК-1.2В, ШМН-1.1М, ШМН-1.1В, ШМН-1.2М, ШМН-1.2В (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Исполнение	Внешний вид	Описание
ШМК-1.1М		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверка выполнена из металла с полимерно-порошковым покрытием. Шкаф оснащен полками (двумя стац. и тремя съемными). Шкаф установлен спереди на регулируемые опоры, сзади на колесо для удобства перемещения. Габаритные размеры: Ширина 478±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10
ШМК-1.1В		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверка выполнена из влагостойкой ЛДСП. Шкаф оснащен полками (двумя стац. и тремя съемными). Шкаф установлен спереди на регулируемые опоры, сзади на колесо для удобства перемещения. Габаритные размеры: Ширина 478±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10
ШМК-1.2М		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверка верхней секции выполнена из стекла в рамке из алюминиевого профиля. В секции три съемные полки. Дверка нижней секции выполнена из металла с полимерно-порошковым покрытием. В секции одна съемная полка. Шкаф установлен спереди на регулируемые опоры, сзади на колесо для удобства перемещения. Габаритные размеры: Ширина 475±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10
ШМК-1.2В		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверка верхней секции выполнена из стекла в рамке из алюминиевого профиля. В секции

Исполнение	Внешний вид	Описание
		три съемные полки. Дверка нижней секции выполнена из влагостойкой ЛДСП. В секции одна съемная полка. Шкаф установлен спереди на регулируемые опоры, сзади на колесо для удобства перемещения. Габаритные размеры: Ширина 475±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10
ШМН-1.1М		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверка выполнена из металла с полимерно-порошковым покрытием. Шкаф оснащен полками (двумя стац. и тремя съемными). Шкаф установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 478±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10
ШМН-1.1В		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверка выполнена из влагостойкой ЛДСП. Шкаф оснащен полками (двумя стац. и тремя съемными). Шкаф установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 478±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10
ШМН-1.2М		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверка верхней секции выполнена из стекла в рамке из алюминиевого профиля. В секции три съемные полки. Дверка нижней секции выполнена из металла с полимерно-порошковым покрытием. В секции одна съемная полка. Шкаф установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 475±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10
ШМН-1.2В		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверка верхней секции выполнена из стекла в рамке из алюминиевого профиля. В секции три съемные полки. Дверка нижней секции выполнена из влагостойкой ЛДСП. В секции одна съемная полка. Шкаф установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 475±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10

3. Комплект поставки

для ШМК-1.1М, ШМК-1.1В, ШМН-1.1М, ШМН-1.1В

Пакет №1

1. Шкаф – 1 шт.
2. Ручка-скоба – 1 шт.
3. Винт 4х20 – 2 шт.
4. Колесо ф 75 на платформе, неповоротное – 2 шт. (для ШМК-1.1М, ШМК-1.1В)
5. Шуруп 3,5х20 – 16 шт.
6. Ножка 100 мм – 2 шт. (для ШМК-1.1М, ШМК-1.1В)
– 4 шт. (для ШМН-1.1М, ШМН-1.1В)
7. Полкодержатель – 12 шт.
8. Полка – 3 шт.
9. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Комплект поставки

для ШМК-1.2М, ШМК-1.2В, ШМН-1.2М, ШМН-1.2В

Пакет №1

1. Шкаф – 1 шт.
2. Полка – 4 шт.
3. Полкодержатель – 16 шт.
4. Ручка-скоба – 2 шт.
5. Винт 4х20 – 4 шт.
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

4. Инструкция по сборке

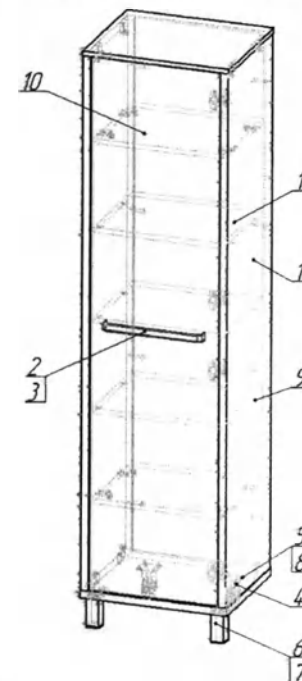


Рис. 1 Схема сборки шкафов ШМК-1.1М, ШМК-1.1В, ШМН-1.1М, ШМН-1.1В

- 4.1. Распаковать шкаф и комплектующие.
- 4.2. Закрепить ножки 100 мм (7) на нижней панели шкафа при помощи шурупов 3,5х20 (6), совместив отверстия в площадке с наметками на панели.
- 4.3. Закрепить колеса (4) на нижней панели шкафа при помощи шурупов 4,8х16 (5) и шайб м5 увелич. (8), совместив отверстия на площадке с наметками на панели. (для шкафов ШМК-1.1М, ШМК-1.1В).
- 4.4. Установить ручки (2) на дверке при помощи винтов 4х20 (3).
- 4.5. Установить полкодержатели (9) в отверстия боковин шкафа и положить на них полки (10).
- 4.6. Отрегулировать опоры шкафа при необходимости.
- 4.7. Шкаф готов к эксплуатации.

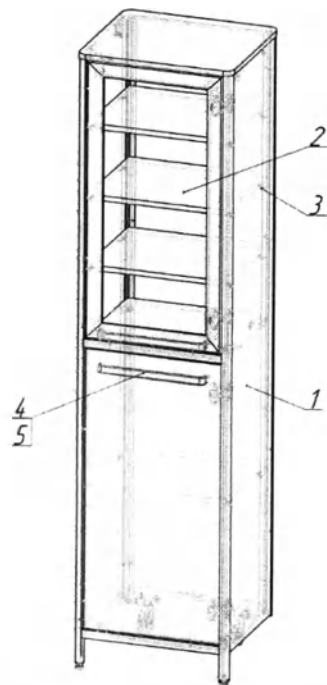


Рис. 2 Схема сборки шкафов ШМК-1.2М, ШМК-1.2В, ШМН-1.2М, ШМН-1.2В

- 4.1. Распаковать шкаф и комплектующие.
- 4.2. Установить ручки (4) на дверке при помощи винтов 4х20 (5).
- 4.3. Установить полкодержатели (3) в отверстия боковин шкафа и положить на них полки (2).
- 4.4. Отрегулировать опоры шкафа при необходимости.
- 4.5. Шкаф готов к эксплуатации.

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств в исполнениях: ШМК-2.1М, ШМК-2.1В, ШМК-2.2М, ШМК-2.2В, ШМН-2.1М, ШМН-2.1В, ШМН-2.2М, ШМН-2.2В (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Исполнение	Внешний вид	Описание
ШМК-2.1М		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверки выполнены из металла с полимерно-порошковым покрытием. Шкаф оснащен полками (одной стац. и четырьмя съемными). Шкаф установлен спереди на регулируемые опоры, сзади на колесо для удобства перемещения. Габаритные размеры: Ширина 902±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10
ШМК-2.1В		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверки выполнены из влагостойкой ЛДСП. Шкаф оснащен полками (одной стац. и четырьмя съемными). Шкаф установлен спереди на регулируемые опоры, сзади на колесо для удобства перемещения. Габаритные размеры: Ширина 902±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10
ШМК-2.2М		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверки верхней секции выполнены из стекла в рамке из алюминиевого профиля. В секции три съемных полки. Дверки нижней секции выполнены из металла с полимерно-порошковым покрытием. В секции одна съемная полка. Шкаф установлен спереди на регулируемые опоры, сзади на колесо для удобства перемещения. Габаритные размеры: Ширина 902±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10
ШМК-2.2В		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверки верхней секции выполнены из стекла в рамке из алюминиевого профиля. В секции три съемных полки. Дверки нижней секции

Исполнение	Внешний вид	Описание
		выполнены из влагостойкой ЛДСП. В секции одна съемная полка. Шкаф установлен спереди на регулируемые опоры, сзади на колесо для удобства перемещения. Габаритные размеры: Ширина 902±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10
ШМН-2.1М		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверки выполнены из металла с полимерно-порошковым покрытием. Шкаф оснащен полками (одной стац. и четырьмя съемными). Шкаф установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 902±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10
ШМН-2.1В		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверки выполнены из влагостойкой ЛДСП. Шкаф оснащен полками (одной стац. и четырьмя съемными). Шкаф установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 902±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10
ШМН-2.2М		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверки верхней секции выполнены из стекла в рамке из алюминиевого профиля. В секции три съемных полки. Дверки нижней секции выполнены из металла с полимерно-порошковым покрытием. В секции одна съемная полка. Шкаф установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 902±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10
ШМН-2.2В		Шкаф из алюминиевого профиля с заполнением влагостойкой ЛДСП. Дверки верхней секции выполнены из стекла в рамке из алюминиевого профиля. В секции три съемные полки. Дверки нижней секции выполнены из влагостойкой ЛДСП. В секции одна съемная полка. Шкаф установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 902±5/Глубина 400±5/Высота 1900±10

3. Комплект поставки
для ШМК-2.1М, ШМК-2.1В, ШМН-2.1М, ШМН-2.1В

Пакет №1

1. Шкаф – 1 шт.
2. Полка - 4 шт.
3. Ручка-скоба – 2 шт.
4. Винт 4х20 – 4 шт.
5. Полкодержатель - 16 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Комплект поставки
для ШМК-2.2М, ШМК-2.2В, ШМН-2.2М, ШМН-2.2В

Пакет №1

1. Шкаф – 1 шт.
2. Полка - 4 шт.
3. Ручка-скоба – 4 шт.
4. Винт 4х20 – 8 шт.
5. Полкодержатель - 16 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Инструкция по сборке

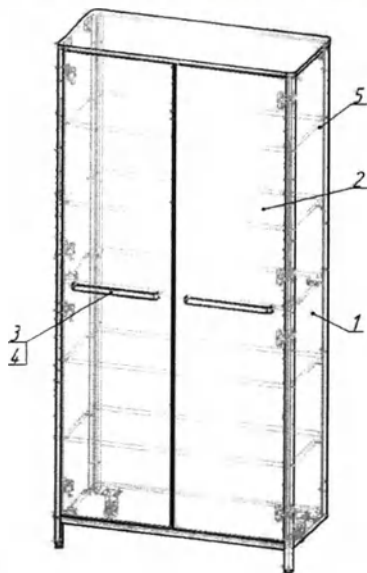


Рис. 1 Схема сборки шкафов ШМК-2.1М, ШМК-2.1В, ШМН-2.1М, ШМН-2.1В

- 4.1. Распаковать шкаф и комплектующие.
- 4.2. Установить ручки (3) на дверке при помощи винтов 4х20 (4).
- 4.3. Установить полкодержатели (5) в отверстия боковин шкафа и положить на них полки (2).
- 4.4. Отрегулировать опоры шкафа при необходимости.
- 4.5. Шкаф готов к эксплуатации.

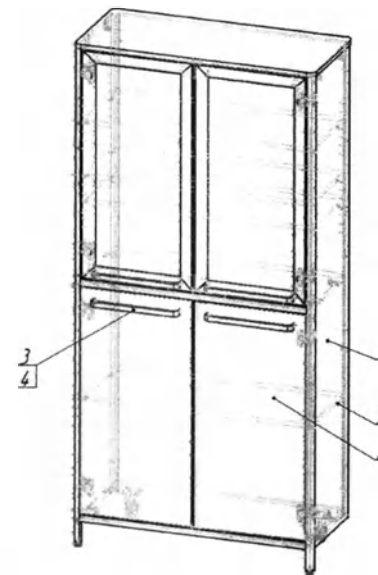


Рис. 2 Схема сборки шкафов ШМК-2.2М, ШМК-2.2В, ШМН-2.2М, ШМН-2.2В

- 4.1. Распаковать шкаф и комплектующие.
- 4.2. Установить ручки (3) на дверке при помощи винтов 4х20 (4).
- 4.3. Установить полкодержатели (5) в отверстия боковин шкафа и положить на них полки (2).
- 4.4. Отрегулировать опоры шкафа при необходимости.
- 4.5. Шкаф готов к эксплуатации.

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств в исполнениях: ШК-1.1, ШК-1.2, ШК-1.3, ШК-1.4, ШК-1.5, ШК-1.6, ШК-1.7, ШК-1.8, ШК-1.9, ШК-1.10 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 500±5 мм, глубина 400±5 мм, Высота 1850±10 мм

Исполнение	Внешний вид	Описание
ШК-1.1		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверка из HPL-пластика (запирается на замок), оснащена тремя съемными, регулируемыми полками металл; нижняя секция - дверка из HPL-пластика (запирается на замок), оснащена съемной, регулируемой полкой металл. Установлен на регулируемые опоры.
ШК-1.2		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверка из HPL-пластика со стеклянной вставкой (запирается на замок), оснащена тремя съемными, регулируемыми полками из HPL-пластик; нижняя секция - дверка из HPL-пластика (запирается на замок), оснащена съемной, регулируемой полкой металл. Установлен на регулируемые опоры.
ШК-1.3		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверка из стекла, оснащена тремя съемными, регулируемыми полками стекло; нижняя секция - дверка из HPL-пластика (запирается на замок), оснащена съемной, регулируемой полкой металл. Установлен на регулируемые опоры.

Исполнение	Внешний вид	Описание
ШК-1.4		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверка из металла (запирается на замок), оснащена тремя съемными, регулируемыми полками металл; нижняя секция - дверка из металла (запирается на замок), оснащена съемной, регулируемой полкой металл. Установлен на регулируемые опоры.
ШК-1.5		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверка из стекла, оснащена тремя съемными, регулируемыми полками стекло; нижняя секция - дверка из металла (запирается на замок), оснащена съемной, регулируемой полкой металл. Установлен на регулируемые опоры.
ШК-1.6		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверка из HPL-пластика (запирается на замок), оснащена тремя съемными, регулируемыми полками металл; нижняя секция - четыре выдвижных ящика с фасадами из HPL-пластика. Верхний ящик запирается на замок. Установлен на регулируемые опоры.
ШК-1.7		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверка из HPL-пластика со стеклянной вставкой (запирается на замок), оснащена тремя съемными, регулируемыми полками из HPL-пластика; нижняя секция - четыре выдвижных ящика с фасадами из HPL-пластика. Верхний ящик запирается на замок. Установлен на регулируемые опоры.

ШК-1.8		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверка из стекла, оснащена тремя съемными, регулируемыми полками стекло; нижняя секция - четыре выдвижных ящика с фасадами из HPL-пластика. Верхний ящик запирается на замок. Установлен на регулируемые опоры.
ШК-1.9		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверка из металла (запирается на замок), оснащена тремя съемными, регулируемыми полками металл; нижняя секция - четыре выдвижных ящика с фасадами из металла. Верхний ящик запирается на замок. Установлен на регулируемые опоры.
ШК-1.10		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверка из стекла, оснащена тремя съемными, регулируемыми полками стекло; нижняя секция - четыре выдвижных ящика с фасадами из металла. Верхний ящик запирается на замок. Установлен на регулируемые опоры.

3. Комплект поставки

Пакет №1:

шкаф - 1 шт.

ключ замка - 4 шт. (для ШК-1.1, ШК-1.2, ШК-1.4, ШК-1.6, ШК-1.7, ШК-1.9)

- 2 шт. (для ШК-1.3, ШК-1.5, ШК-1.8, ШК-1.10)

полка металл - 1 шт. (для ШК-1.2, ШК-1.3, ШК-1.5)

- 3 шт. (для ШК-1.6, ШК-1.9)

- 4 шт. (для ШК-1.1, ШК-1.4)

полка пластик - 3 шт. (для ШК-1.2, ШК-1.7)

полкодержатели - 16 шт. (для ШК-1.1, ШК-1.2, ШК-1.3, ШК-1.4, ШК-1.5).

- 12 шт. (для ШК-1.6, ШК-1.7, ШК-1.8, ШК-1.9, ШК-1.10)

полка стекло - 3 шт. (для ШК-1.3, ШК-1.5, ШК-1.8, ШК-1.10)

ручка для стекла - 1 шт. (для ШК-1.3, ШК-1.5, ШК-1.8, ШК-1.10)

петля для стеклянной двери левая - 1 шт. (для ШК-1.3, ШК-1.5, ШК-1.8, ШК-1.10)

петля для стеклянной двери правая - 1 шт. (для ШК-1.3, ШК-1.5, ШК-1.8, ШК-1.10)

дверка стекло - 1 шт. (для ШК-1.3, ШК-1.5, ШК-1.8, ШК-1.10)

руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Инструкция по сборке

- ✓ Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
- ✓ Отрегулировать положение ножек.
Для исполнений ШК-1.3, ШК-1.5, ШК-1.8, ШК-1.10
Установить петли стеклянных дверок в пластмассовые втулки. При этом крепежные винты должны быть внутри шкафа.
- ✓ В петли вложить пластмассовые вкладыши. Вставить стеклянную дверку в петлю между пластиковыми вкладышами. Передвигая стекло в петлях, отрегулировать зазор между стеклянной дверкой и каркасом шкафа. Затянуть крепежные винты до надежной фиксации стекла в петлях.
- ✓ Вложить широкий пластиковый вкладыш в ручку. Вставить ручку в нижнюю кромку стеклянной дверки напротив магнитного держателя.
- ✓ Установить полкодержатели в пазы на удобном уровне.
- ✓ Уложить на полкодержатели полки.
- ✓ Шкаф готов к эксплуатации.

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-10 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 402±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-10		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция - дверка стекло, оснащена двумя съемными полками ЛДСП, нижняя секция - с дверкой, оснащена съемной полкой ЛДСП. Нижняя дверь закрывается на замок.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
1.	Пакет №1: Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель задней стенки		1 шт.
4.	Панель средняя		1 шт.
5.	Панель полки съемной		3 шт.
6.	Панель дверки		1 шт.
7.	Опора регулируемая		4 шт.
8.	Шуруп 4x20		20 шт.
9.	Шток эксцентрика		9 шт.
10.	Эксцентрик		9 шт.
11.	Заглушка эксцентрика		9 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
12.	Винт полкодержателя		12 шт.
13.	Полкодержатель		12 шт.
14.	Шток эксцентрика усиленного		4 шт.
15.	Эксцентрик усиленный		4 шт.
16.	Ключ шестигранный		1 шт.
17.	Петля для ст. дверки		2 шт.
18.	Петля 4-х шарнирная		2 шт.
19.	Шуруп 4x16		4 шт.
20.	Евровинт 6,3x13		8 шт.
21.	Ручка-скоба		2 шт.
22.	Втулка ручки для ст. дверки		2 шт.
23.	Винт М4x12		2 шт.
24.	Шайба 4		2 шт.
25.	Замок		1 шт.
26.	Ключ от замка		2 шт.
27.	Шуруп 3x16		2 шт.
28.	Пакет №2: Панель дверки стекло		1 шт.
29.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

поверхности.

2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (8) при помощи шурупов (8). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (9) до упора.

3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**

4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (10). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (16) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрыть эксцентрики заглушками (11).

5. Установить заднюю стенку (3) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас модуля сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (10) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (12) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.

8. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (14). Вставить эксцентрик усиленный (15) в подготовленные отверстия средней панели (4) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.

9. Прикрепить шарнирные петли (17) для стеклянных дверок (28) согласно схеме сборки петли (см. схему). Для этого необходимо вставить чашку петли в подготовленное отверстие стеклянной дверки с внутренней стороны, с лицевой стороны зафиксировать петлю при помощи вкладки и установочных винтов. Закрыть вкладку декоративной крышкой.

10. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (20), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

11. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (18) на панель дверки (4), двумя шурупами (20) каждую.

12. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (20), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

13. Отрегулировать положение панелей дверок и величину зазоров с помощью шарнирной петли (см. схему).

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной


14. Установить ручку (21) на панель дверки (7) при помощи втулки (22) и винта М4х12 (23).

15. Установить ручку (21) на панель дверки (6) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (24).

16. Установить в подготовленное отверстие замок мебельный (25). Закрепить его шурупами (8). К средней панели (4) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (19).

17. Шкаф готов к эксплуатации.

Порядок регулировки 4-х шарнирной петли

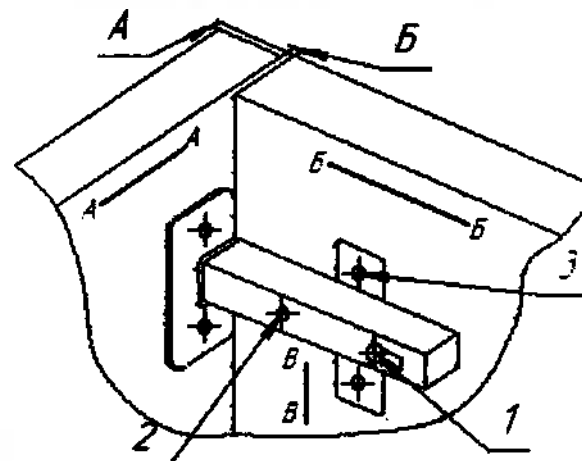

Регулировка петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями - 3 мм. Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.




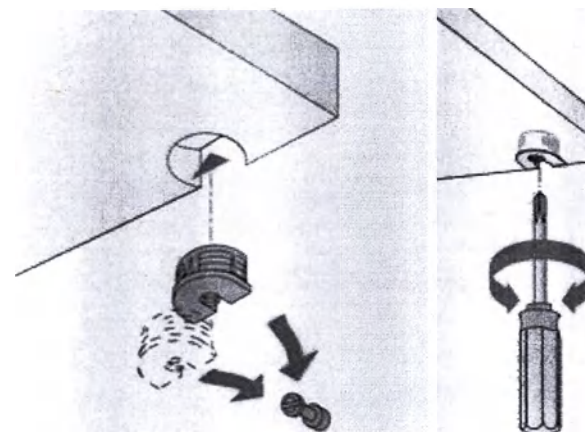


Схема установки замка мебельного (при наличии)

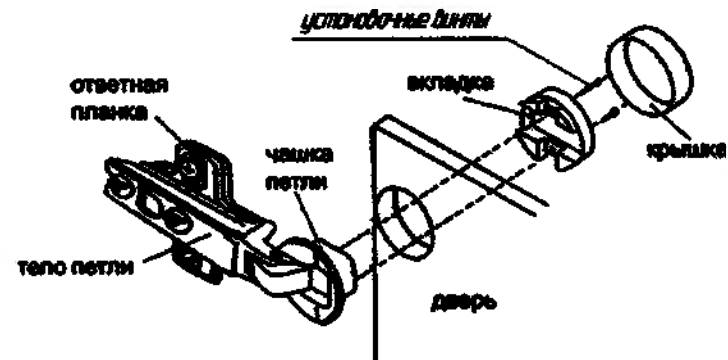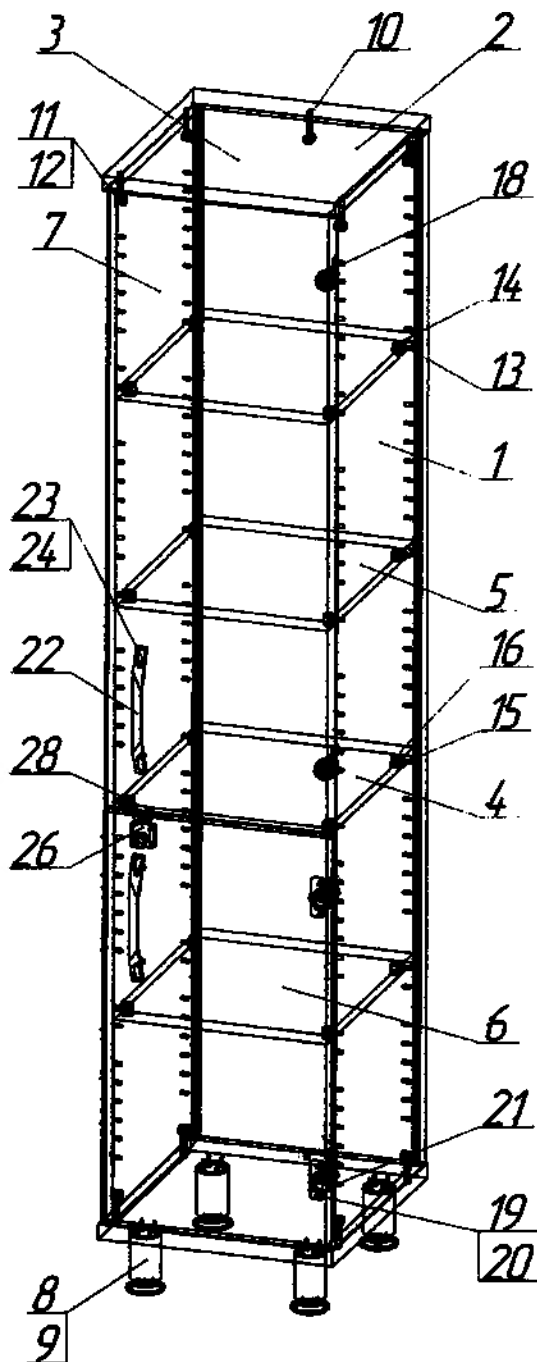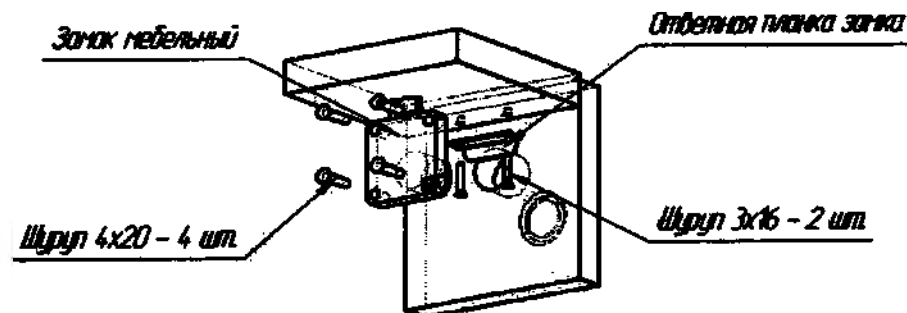

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-11 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 402±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-11		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция - дверка стекло, оснащена съемной полкой ЛДСП, нижняя секция - с дверкой, оснащена съемной полкой ЛДСП. Средняя секция - открытая ниша. Нижняя дверка закрывается на замок.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
1.	Пакет №1: Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель задней стенки		1 шт.
4.	Панель средняя		2 шт.
5.	Панель полки съемной		2 шт.
6.	Панель дверки		1 шт.
7.	Опора регулируемая		4 шт.
8.	Шуруп 4x20		20 шт.
9.	Шток эксцентрика		9 шт.
10.	Эксцентрик		9 шт.
11.	Заглушка эксцентрика		9 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
12.	Винт полкодержателя		8 шт.
13.	Полкодержатель		8 шт.
14.	Шток эксцентрика усиленного		8 шт.
15.	Эксцентрик усиленный		8 шт.
16.	Ключ шестигранный		1 шт.
17.	Петля для ст. дверки		2 шт.
18.	Петля 4-х шарнирная		2 шт.
19.	Шуруп 4x16		4 шт.
20.	Евровинт 6,3x13		8 шт.
21.	Ручка-скоба		2 шт.
22.	Втулка ручки для ст. дверки		2 шт.
23.	Винт М4х12		2 шт.
24.	Шайба 4		2 шт.
25.	Замок		1 шт.
26.	Ключ от замка		2 шт.
27.	Шуруп 3x16		2 шт.
28.	Пакет №2: Панель дверки стекло		1 шт.
29.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

поверхности.

2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (7) при помощи шурупов (8). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (10) до упора.

3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**

4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (10). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (16) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (12).

5. Установить заднюю стенку (3) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас модуля сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. Вернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (10) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (12) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.

8. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (14). Вставить эксцентрик усиленный (15) в подготовленные отверстия средней панели (4) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.

9. Прикрепить шарнирные петли (17) для стеклянных дверок (28) согласно схеме сборки петли (см. схему). Для этого необходимо вставить чашку петли в подготовленное отверстие стеклянной дверки с внутренней стороны, с лицевой стороны зафиксировать петлю при помощи вкладки и установочных винтов. Закрепить вкладку декоративной крышкой.

10. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (20), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

11. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (18) на панель дверки (4), двумя шурупами (19) каждую.

12. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (20), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

13. Отрегулировать положение панелей дверок и величину зазоров с помощью регулировки шарнирной петли (см. схему).

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной


14. Установить ручку (21) на панель дверки (7) при помощи втулки (22) и винта М4х12 (23).

15. Установить ручку (21) на панель дверки (6) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (24).

16. Установить в подготовленное отверстие замок мебельный (25). Закрепить его шурупами (8). К средней панели (4) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (19).

17. Шкаф готов к эксплуатации.

Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

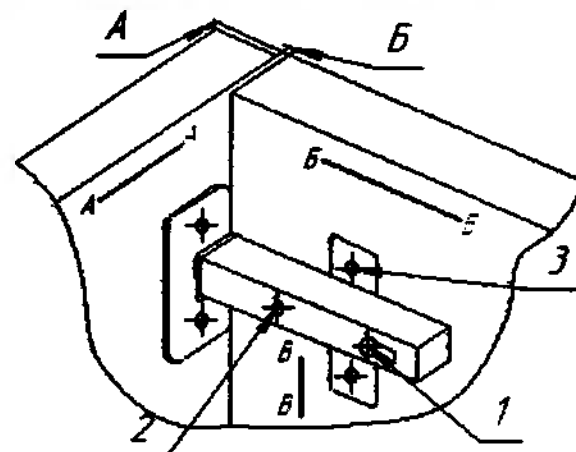

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлении по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".




2. Регулирующим винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".

3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.


4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.

5. Предусмотренный зазор между дверью – 3 мм.

Во избежание поломки петлю открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

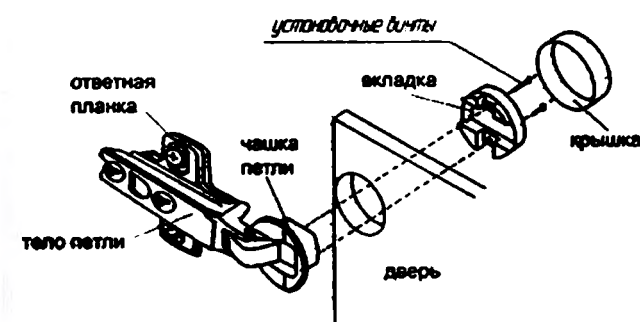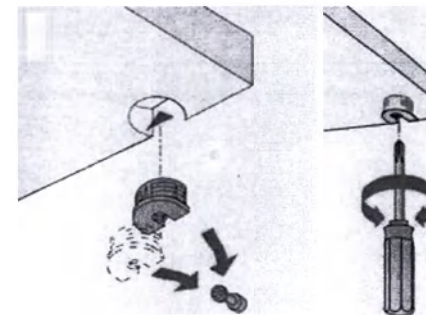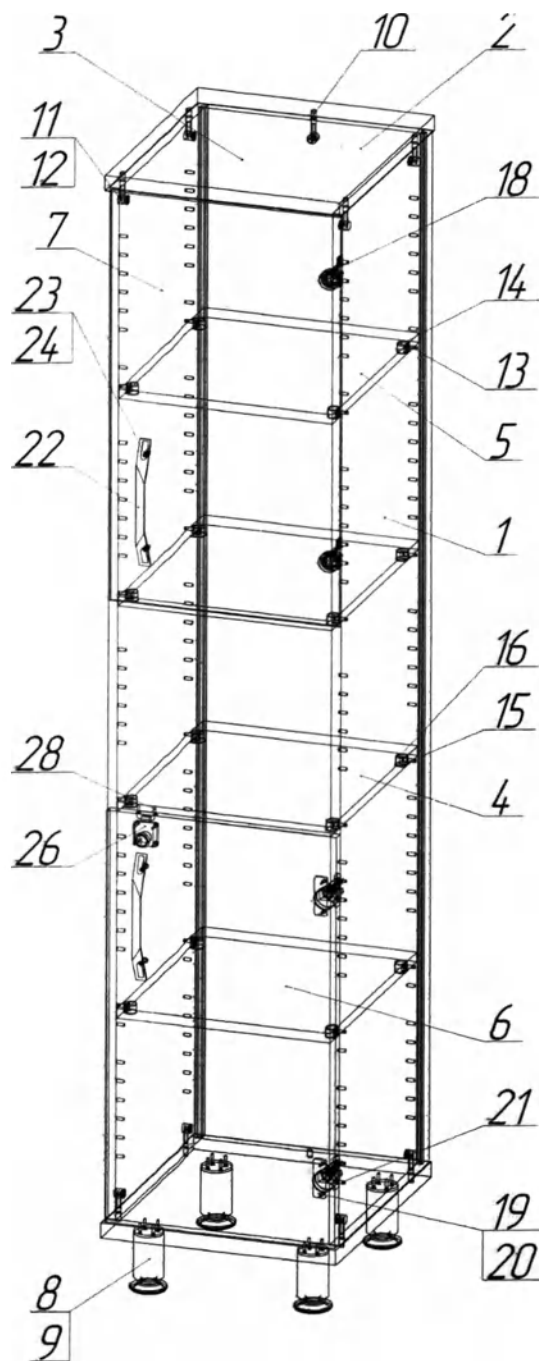

(схема установки замка мебельного (при наличии))

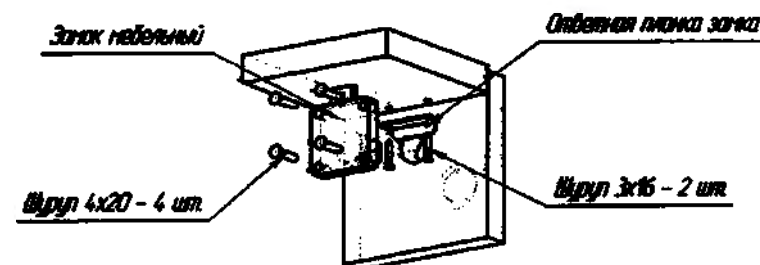

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-12 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 402±5 мм, глубина 457±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-12		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция - дверка стекло, оснащена съемной полкой ЛДСП, нижняя секция – дверка стекло, оснащена съемной полкой ЛДСП. Средняя секция - открытая ниша.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
1.	Пакет №1: Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель задней стенки		1 шт.
4.	Панель средняя		2 шт.
5.	Панель полки съемной		2 шт.
7.	Опора регулируемая		4 шт.
8.	Шуруп 4x20		16 шт.
9.	Шток эксцентрика		9 шт.
10.	Эксцентрик		9 шт.
11.	Заглушка эксцентрика		9 шт.
12.	Винт полкодержателя		8 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
13.	Полкодержатель		8 шт.
14.	Шток эксцентрика усиленного		8 шт.
15.	Эксцентрик усиленный		8 шт.
16.	Ключ шестигранный		1 шт.
17.	Петля для ст. дверки		4 шт.
18.	Евровинт 6,3x13		8 шт.
19.	Ручка-скоба		2 шт.
20.	Втулка ручки для ст. дверки		4 шт.
21.	Винт М4х12		4 шт.
22.	Руководство по эксплуатации		1 шт.
23.	Пакет №2: Панель дверки стекло		2 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (7) при помощи шурупов (8). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (9) до упора.
3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**
4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (10). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (16) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (11).
5. Установить заднюю стенку (3) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас модуля сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (12) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (13) в подготовленные отверстия полки (5) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.

8. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (14). Вставить эксцентрик усиленный (15) в подготовленные отверстия средней панели (4) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.


9. Прикрепить шарнирные петли (17) для стеклянных дверок (6) согласно схеме сборки петли (см. схему). Для этого необходимо вставить чашку петли в подготовленное отверстие стеклянной дверки с внутренней стороны, с лицевой стороны зафиксировать петлю при помощи вкладки и установочных винтов. Закрепить вкладку декоративной крышечкой.

10. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (18), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.


11. Отрегулировать положение панелей дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).

12. Установить ручку (19) на панель дверки (6) при помощи втулки (20) и винта М4х12 (21).

13. Шкаф готов к эксплуатации.


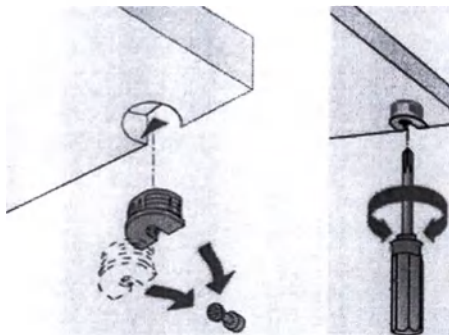


доп регулирование 4-х шарнирной петли

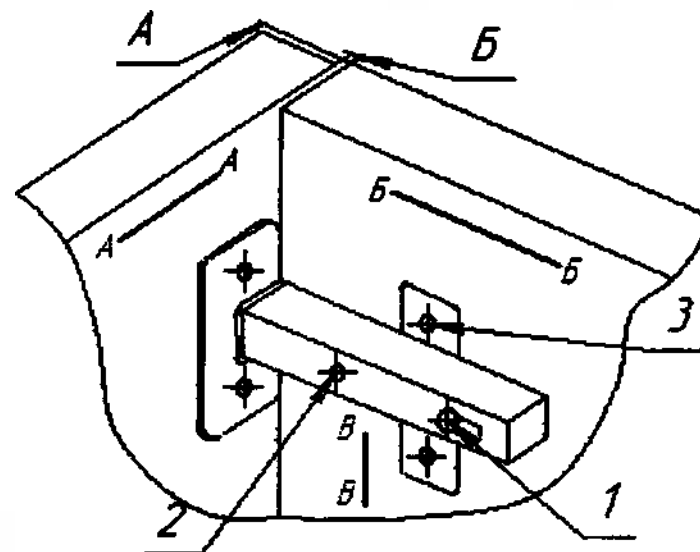

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шуруп 3 планка петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями - 3 мм.
Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

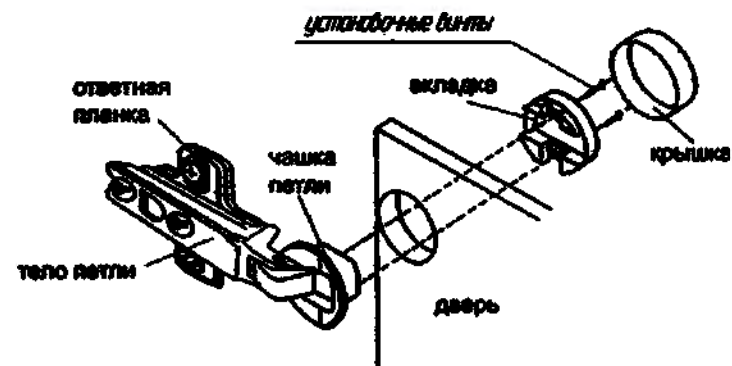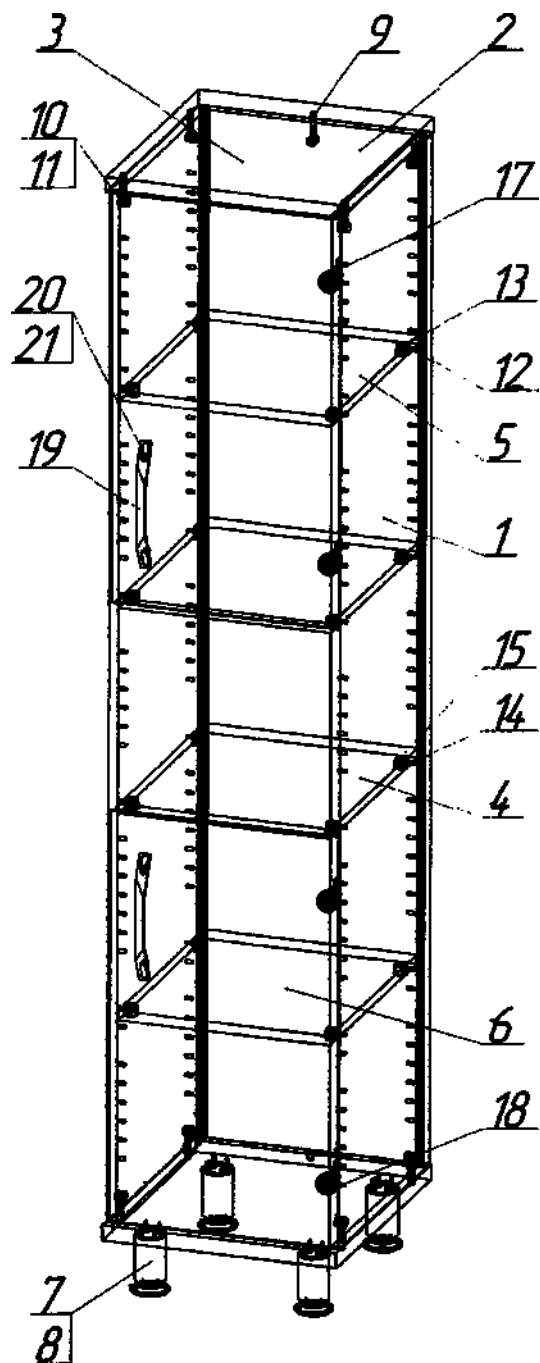

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-13 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 402±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-13		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция – с дверкой, оснащена двумя съемными полками ЛДСП, нижняя секция – с дверкой, оснащена съемной полкой ЛДСП. Верхняя дверка закрывается на замок.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
1.	Пакет №1: Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель задней стенки		1 шт.
4.	Панель средняя		1 шт.
5.	Панель полки съемной		3 шт.
6.	Панель дверки		2 шт.
7.	Опора регулируемая		4 шт.
8.	Шуруп 4x20		24 шт.
9.	Шток эксцентрика		9 шт.
10.	Эксцентрик		9 шт.
11.	Заглушка эксцентрика		9 шт.
12.	Винт полкодержателя		12 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
13.	Полкодержатель		12 шт.
14.	Шток эксцентрика усиленного		4 шт.
15.	Эксцентрик усиленный		4 шт.
16.	Ключ шестигранный		1 шт.
17.	Петля 4-х шарнирная		4 шт.
18.	Шуруп 4x16		8 шт.
19.	Евровинт 6,3x13		8 шт.
20.	Ручка-скоба		2 шт.
21.	Шайба 4		4 шт.
22.	Замок		2 шт.
23.	Ключ от замка		4 шт.
24.	Шуруп 3x16		4 шт.
25.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (7) при помощи шурунов (8). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (9) до упора.
3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**
4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (10). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (16) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики

заглушками (11).

5. Установить заднюю стенку (3) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас модуля сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (12) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (13) в подготовленные отверстия полки (5) при помощи резинного молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.

8. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (14). Вставить эксцентрик усиленный (15) в подготовленные отверстия средней панели (4) при помощи резинного молотка. Закрепить панель.

9. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (17) на панель дверки (6), двумя шурупами (18) каждую.

10. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (19), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.


11. Отрегулировать положение панелей дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).

12. Установить ручку (20) на панель дверки (6) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (21).

13. Установить в подготовленное отверстие замок мебельный (22). Закрепить его шурупами (8). К боковой панели (1) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (24).

14. Шкаф готов к эксплуатации.

Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

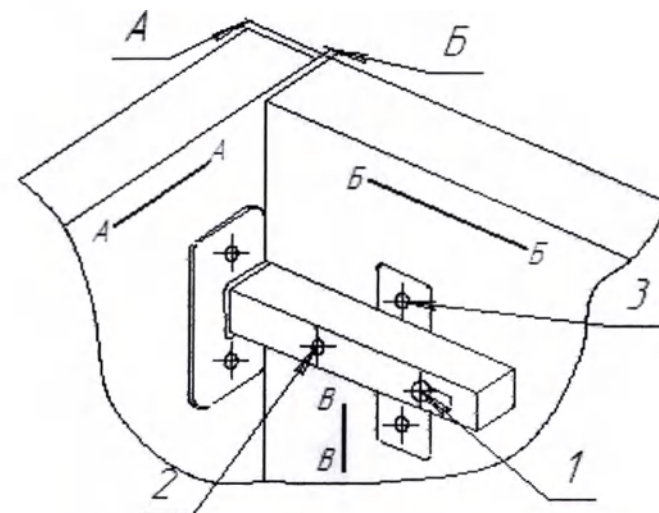

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями – 3 мм.

Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.



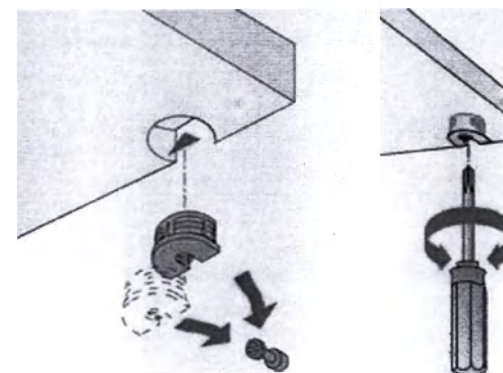


Схема установки замка мебельного (при наличии)

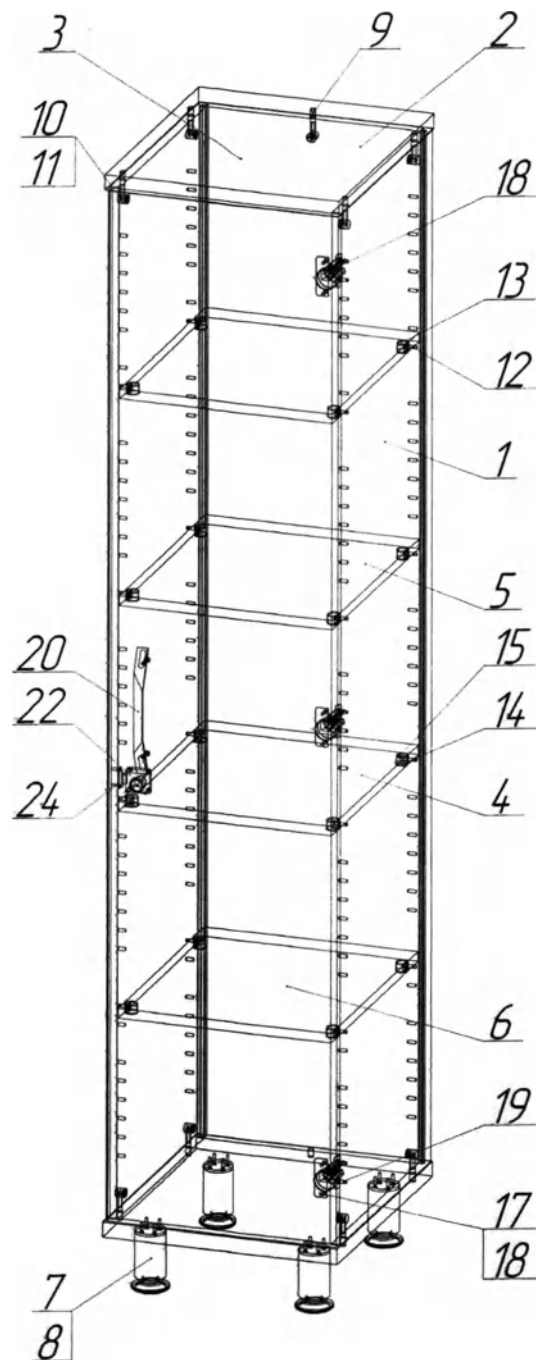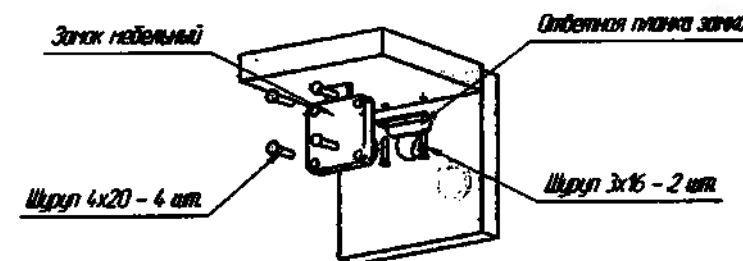

Приложение 8
к руководству по эксплуатации ШДЛП.152016.001 РЭ

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-14 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 402±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-14		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция – с дверкой, оснащена съемной полкой ЛДСП, нижняя секция – с дверкой, оснащена съемной, регулируемой полкой ЛДСП. Средняя секция - открытая ниша. Дверки закрываются на замки.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
1.	Пакет №1: Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель задней стенки		1 шт.
4.	Панель средняя		2 шт.
5.	Панель полки съемной		2 шт.
6.	Панель дверки		2 шт.
7.	Опора регулируемая		4 шт.
8.	Шуруп 4x20		24 шт.
9.	Шток эксцентрика		9 шт.
10.	Эксцентрик		9 шт.
11.	Заглушка эксцентрика		9 шт.
12.	Винт полкодержателя		8 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
13.	Полкодержатель		8 шт.
14.	Шток эксцентрика усиленного		8 шт.
15.	Эксцентрик усиленный		8 шт.
16.	Ключ шестигранный		1 шт.
17.	Петля 4-х шарнирная		4 шт.
18.	Шуруп 4x16		8 шт.
19.	Евровинт 6,3x13		8 шт.
20.	Ручка-скоба		2 шт.
21.	Шайба 4		4 шт.
22.	Замок		2 шт.
23.	Ключ от замка		4 шт.
24.	Шуруп 3x16		4 шт.
25.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (7) при помощи шурупов (8). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (9) до упора.
3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**
4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (10). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (16) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики

заглушками (11).

5. Установить заднюю стенку (3) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас модуля сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (12) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (13) в подготовленные отверстия полки (5) при помощи резинного молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.

8. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (14). Вставить эксцентрик усиленный (15) в подготовленные отверстия средней панели (4) при помощи резинного молотка. Закрепить панель.

9. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (17) на панель дверки (6), двумя шурупами (18) каждую.

10. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (19), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.


11. Отрегулировать положение панелей дверей и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).

12. Установить ручку (20) на панель дверки (6) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (21).

13. Установить в подготовленное отверстие замок мебельный (22). Закрепить его шурупами (8). К средней панели (4) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (24).

14. Шкаф готов к эксплуатации.

Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

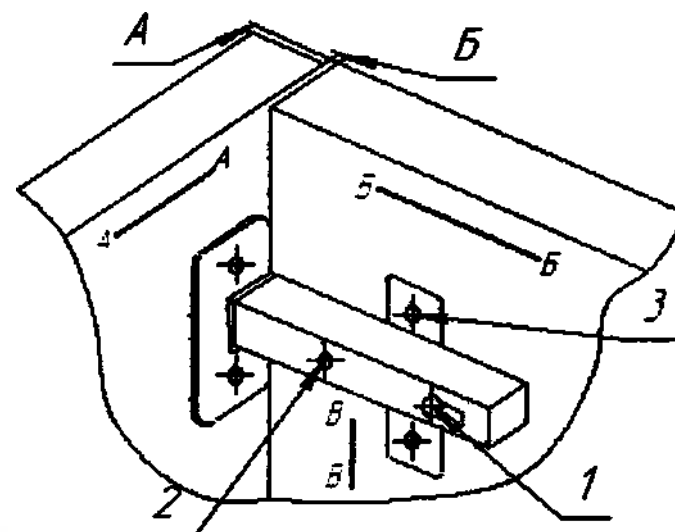

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверью – 3 мм.
Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.



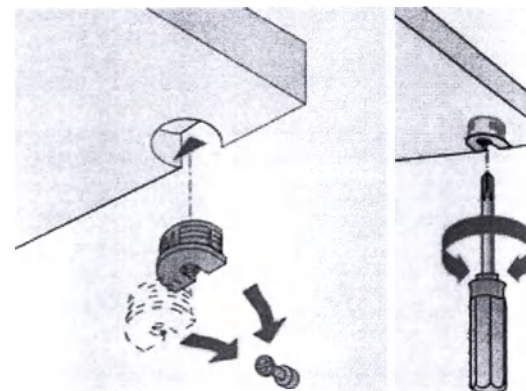


Схема установки замка мебельного (при наличии)

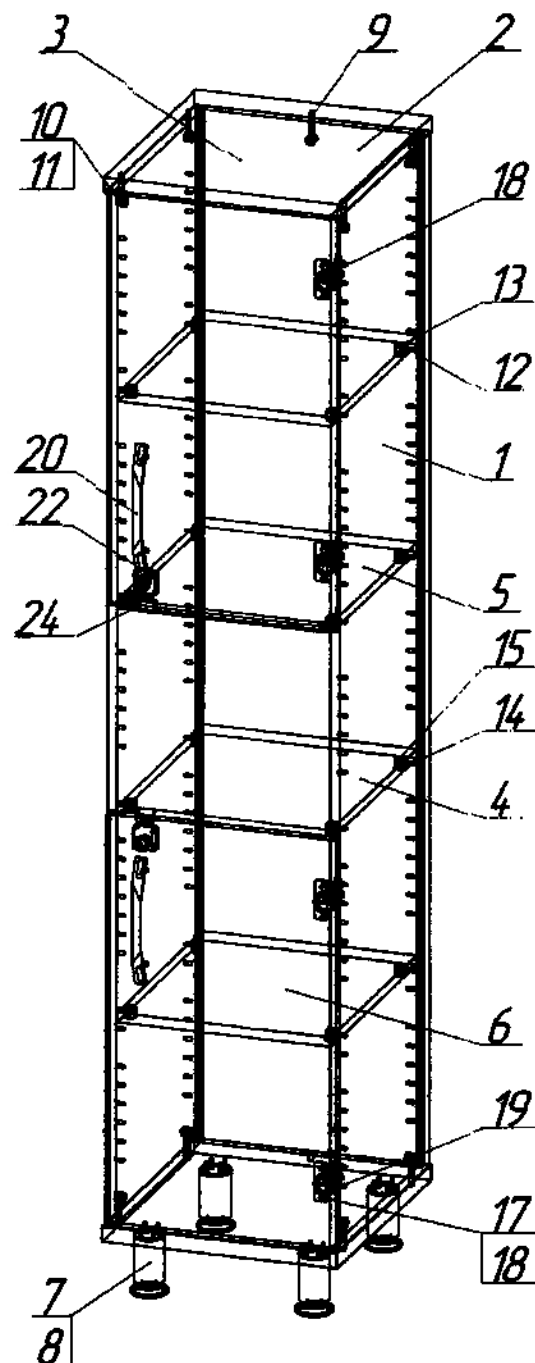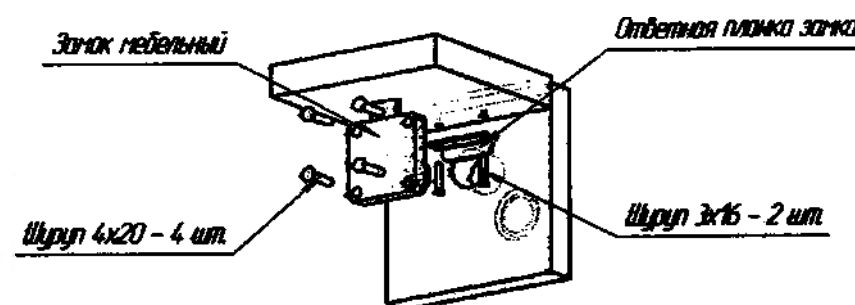

Приложение 9
к руководству по эксплуатации ШДЛ1.152016.001 РЭ

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-15 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 402±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-15		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция – дверка стекло, оснащена двумя съемными полками ЛДСП, нижняя секция – четыре выдвижных ящика. Средняя секция - открытая ниша. Верхний ящик закрывается на замок.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
Пакет №1:			
1.	Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель задней стенки		1 шт.
4.	Панель полки съемной		1 шт.
5.	Панель средняя		1 шт.
6.	Панель ящика нижняя		4 шт.
7.	Панель ящика задняя		3 шт.
8.	Панель ящика задняя большая		1 шт.
9.	Панель ящика фасадная		3 шт.
10.	Панель ящика фасадная большая		1 шт.
Пакет №2:			
11.	Панель дверки стекло		1 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
Пакет №3:			
12.	Комплект ящика Unni		4 шт.
13.	Рейлинг продольный Unni		1 шт.
14.	Опора регулируемая		4 шт.
15.	Шуруп 4x20		20 шт.
16.	Шток эксцентрика		9 шт.
17.	Эксцентрик		9 шт.
18.	Заглушка эксцентрика		9 шт.
19.	Шуруп 3,5x16		52 шт.
20.	Ключ шестигранный		1 шт.
21.	Евровинт 7x50		8 шт.
22.	Саморез 4,2x13 с прессшайбой		40 шт.
23.	Ручка-скоба		5 шт.
24.	Шайба 4		8 шт.
25.	Шток эксцентрика усиленного		4 шт.
26.	Эксцентрик усиленный		4 шт.
27.	Винт полкодержателя		8 шт.
28.	Полкодержатель		8 шт.
29.	Петля для ст. дверки		2 шт.



30.	Втулка ручки для ст. дверки		2 шт.
31.	Винт М4х12		2 шт.
32.	Евровинт 6,3х13		4 шт.
33.	Замок		1 шт.
34.	Ключ от замка		2 шт.
35.	Шуруп 3х16		4 шт.
36.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (14) при помощи шурупов (15). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (16) до упора.
3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**
4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (17). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (20) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (18).
5. Установить заднюю стенку (3) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.
6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас модуля сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**
7. При помощи саморезов (19) прикрепить направляющие Unnihopper (12) к боковым панелям и панелям перегородок изделия в подготовленные наметки крепления.
8. При помощи саморезов (22) прикрепить боковые стенки Unni

(12) к панели—дика нижней (6) так, чтобы со стороны, где к направляющим устанавливается панель фасадная ящика, панель ящика нижняя была на одном уровне с боковыми стенками Unni (12).

9. Вставить держатели задней стенки направляющих Unni (12) в боковые стенки Unni (12). При помощи саморезов (19) прикрепить панель ящика заднюю (7,8) к держателям задней стенки направляющих Unni (12). Затем закрутить евровинты (21) в подготовленные отверстия панели ящика нижней (6).

10. При помощи шурупов (19) прикрепить к панели фасадной ящика (9,10) держатели, для этого необходимо использовать наметки на панели.

11. Отрегулировать ящики согласно схеме регулировки.

12. В подготовленные отверстия установить ручку (23) на панель ящика фасадную (9,10) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (24).

13. При помощи подготовленных отверстий в панели фасадной нижнего ящика (10), установить рейлинг продольный Unni (13) и закрепить его к панели ящика задней (8) при помощи шурупов (19).

14. Прикрепить шарнирные петли (29) для стеклянной дверки (11) согласно схеме сборки петли (см. схему). Для этого необходимо вставить чашку петли в подготовленное отверстие стеклянной дверки с внутренней стороны, с лицевой стороны зафиксировать петлю при помощи вкладки и установочных винтов. Закрепить вкладку декоративной крышкой.

15. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (32), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

16. Отрегулировать положение панели дверки и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).

17. Установить ручку (23) на панель дверки (11) при помощи втулки (30) и винта М4х12 (31).


18. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (25). Вставить эксцентрик усиленный (26) в подготовленные отверстия средней панели (5) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.

18. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (27) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (28) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.

19. Установить в подготовленное отверстие верхнего ящика (9) замок мебельный (33). Закрепить его шурупами (15). К средней панели (5) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (35).


20. Шкаф готов к эксплуатации.



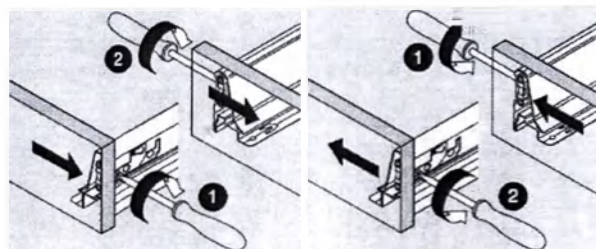


Регулировка по ширине: вправо
1 мм

Регулировка по ширине: влево
1 мм

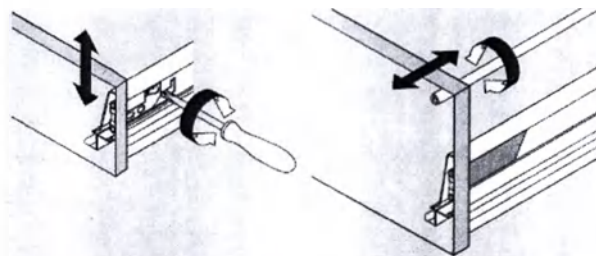


Регулировка по высоте: ± 2 мм

Регулировка наклона

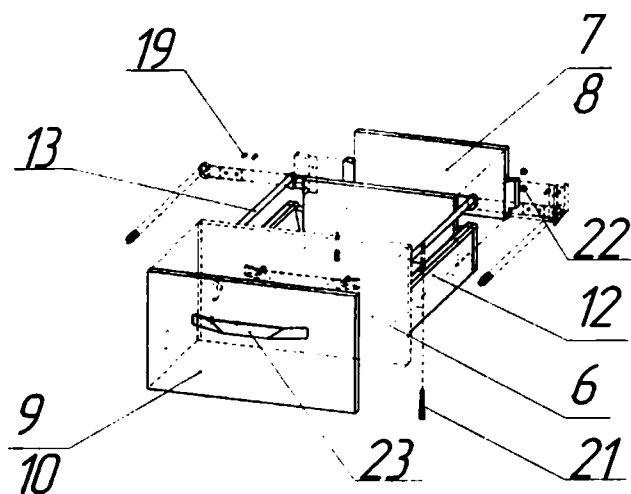

Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

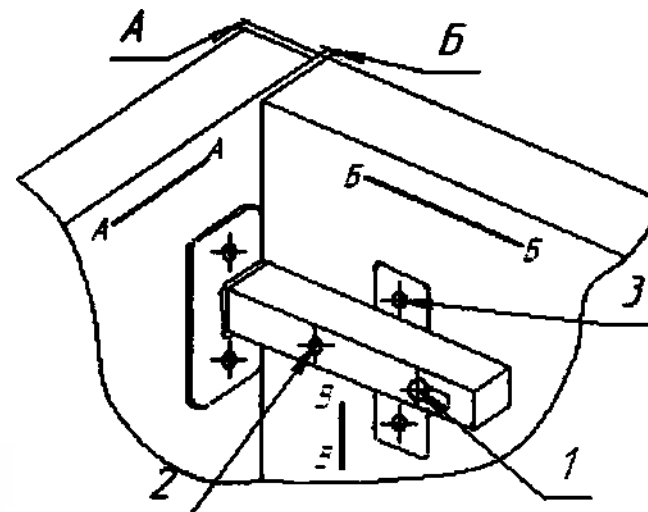

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и В-В и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения двери в направлениях по стрелкам В-В, изменяя размер "В".
2. Регулирующим винтом 2 дверь перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения двери по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями – 3 мм.
Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.




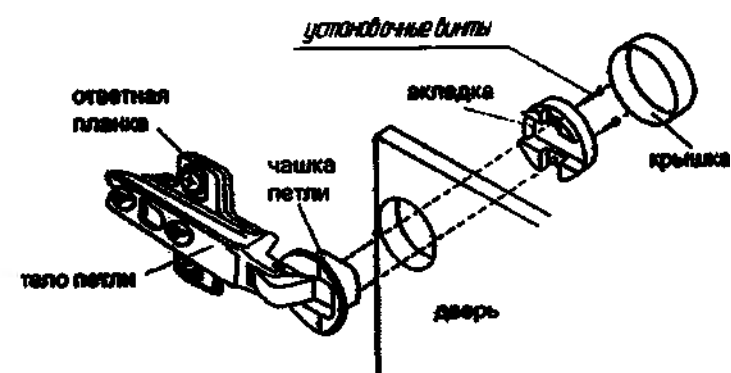


Схема установки замка мебельного (при наличии)

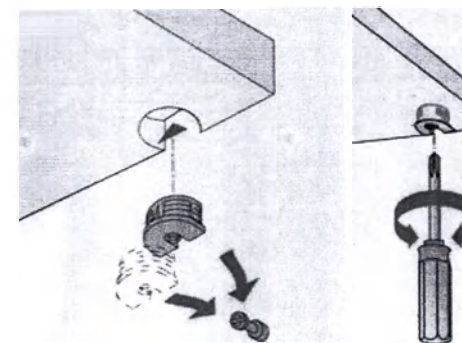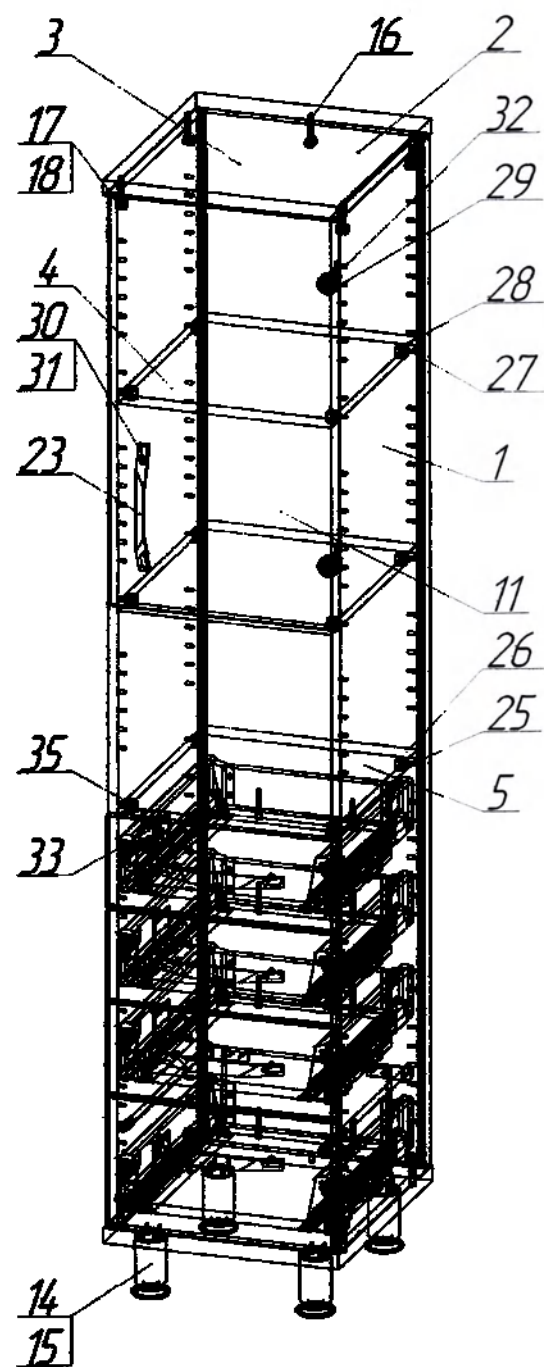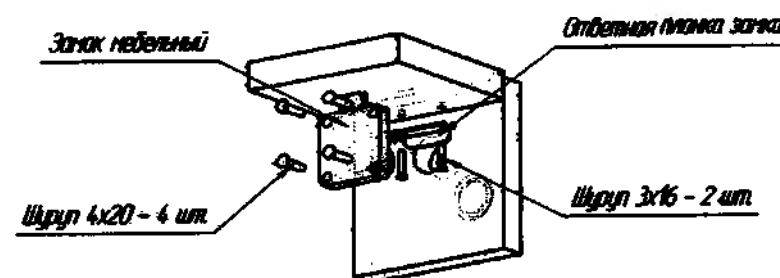

Приложение 10
к руководству по эксплуатации ШДЛ1.152016.001 РЭ

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-16 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание


Габаритные размеры:

Ширина 402±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-16		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция – дверка стекло, оснащена двумя съемными полками ЛДСП, нижняя секция – четыре выдвижных ящика. Верхний ящик закрывается на замок.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
	Пакет №1:		
1.	Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель задней стенки		1 шт.
4.	Панель полки съемной		1 шт.
5.	Панель средняя		1 шт.
6.	Панель ящика нижняя		4 шт.
7.	Панель ящика задняя		3 шт.
8.	Панель ящика задняя большая		1 шт.
9.	Панель ящика фасадная		3 шт.
10.	Панель ящика фасадная большая		1 шт.
	Пакет №2:		
11.	Панель дверки стекло		1 шт.

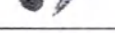№	Наименование	Изображение	Количество
	Пакет №3:		
12.	Комплект ящика Unni		4 шт.
13.	Рейлинг продольный Unni		1 шт.
14.	Опора регулируемая		4 шт.
15.	Шуруп 4x20		20 шт.
16.	Шток эксцентрика		9 шт.
17.	Эксцентрик		9 шт.
18.	Заглушка эксцентрика		9 шт.
19.	Шуруп 3,5x16		52 шт.
20.	Ключ шестигранный		1 шт.
21.	Евровинт 7x50		8 шт.
22.	Саморез 4,2x13 с прессшайбой		40 шт.
23.	Ручка-скоба		5 шт.
24.	Шайба 4		8 шт.
25.	Шток эксцентрика усиленного		8 шт.
26.	Эксцентрик усиленный		8 шт.
27.	Винт полкодержателя		4 шт.
28.	Полкодержатель		4 шт.
29.	Петля для ст. дверки		2 шт.

30.	Втулка ручки для ст. дверки		2 шт.
31.	Винт М4х12		2 шт.
32.	Евровинт 6,3х13		4 шт.
33.	Замок		1 шт.
34.	Ключ от замка		2 шт.
35.	Шуруп 3х16		2 шт.
36.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.

2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (14) при помощи шурупов (15). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентров (16) до упора.

3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**

4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (17). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (20) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (18).

5. Установить заднюю стенку (3) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас модуля сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. При помощи саморезов (19) прикрепить направляющие Unnihorper (12) к боковым панелям и панелям перегородок изделия в подготовленные наметки крепления.

8. Прикрепить боковые стенки Unni

(12) к панели ящика нижней (6) так, чтобы со стороны, где к направляющим устанавливается панель фасадная ящика, панель ящика нижняя была на одном уровне с боковыми стенками Unni (12).

9. Вставить держатели задней стенки направляющих Unni (12) в боковые стенки Unni (12). При помощи саморезов (19) прикрепить панель ящика заднюю (7,8) к держателям задней стенки направляющих Unni (12). Затем закрутить евровинты (21) в подготовленные отверстия панели ящика нижней (6).

10. При помощи шурупов (19) прикрепить к панели фасадной ящика (9,10) держатели, для этого необходимо использовать наметки на панели.

11. Отрегулировать ящики согласно схеме регулировки.

12. В подготовленные отверстия установить ручку (23) на панель ящика фасадную (9,10) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (24).

13. При помощи подготовленных отверстий в панели фасадной нижнего ящика (10), установить рейлинг продольный Unni (13) и закрепить его к панели ящика задней (8) при помощи шурупов (19).

14. Прикрепить шарнирные петли (29) для стеклянной дверки (11) согласно схеме сборки петли (см. схему). Для этого необходимо вставить чашку петли в подготовленное отверстие стеклянной дверки с внутренней стороны, с лицевой стороны зафиксировать петлю при помощи вкладки и установочных винтов. Закрепить вкладку декоративной крышкой.

15. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (32), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

16. Отрегулировать положение панели дверки и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).


17. Установить ручку (23) на панель дверки (11) при помощи втулки (30) и винта М4х12 (31).

18. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентров усиленных (25). Вставить эксцентрик усиленный (26) в подготовленные отверстия средней панели (5) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.

18. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (27) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (28) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.


19. Установить в подготовленное отверстие верхнего ящика (9) замок мебельный (33). Закрепить его шурупами (15). К средней панели (5) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (35).

20. Шкаф готов к эксплуатации.

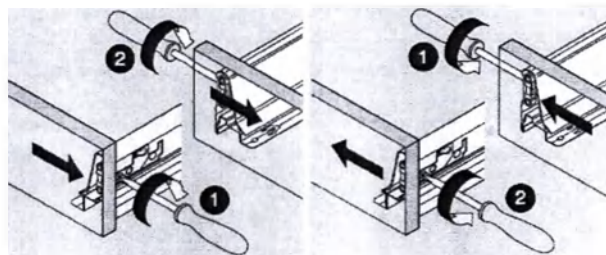


Регулировка по ширине: вправо
1 мм

Регулировка по ширине: влево
1 мм

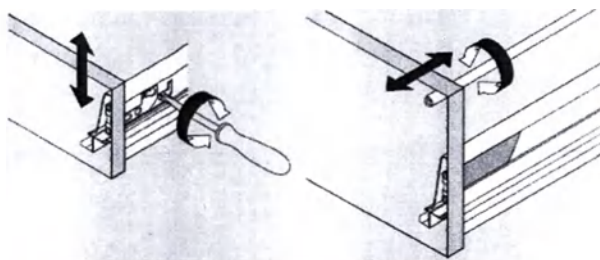


Регулировка по высоте: ± 2 мм

Регулировка наклона

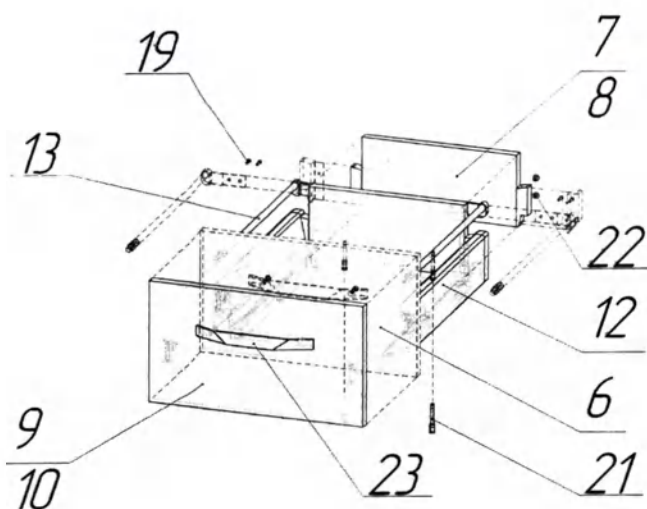

Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

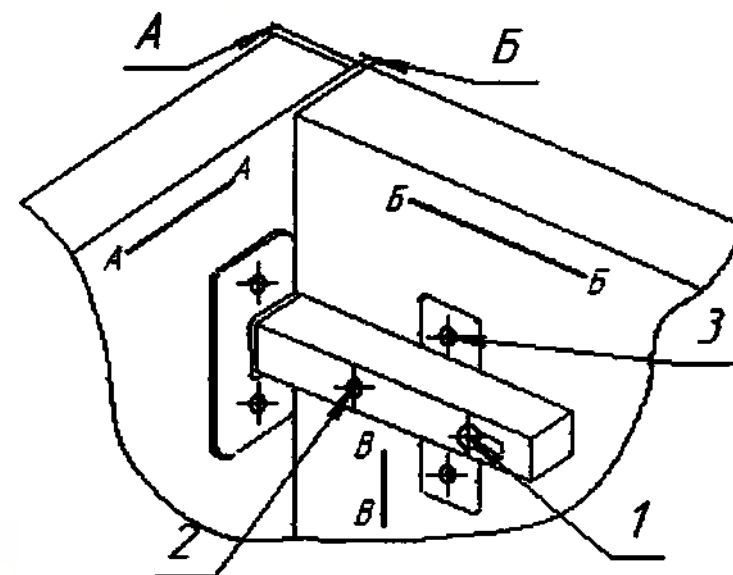

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения двери в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверь перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения двери по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями – 3 мм.
Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.




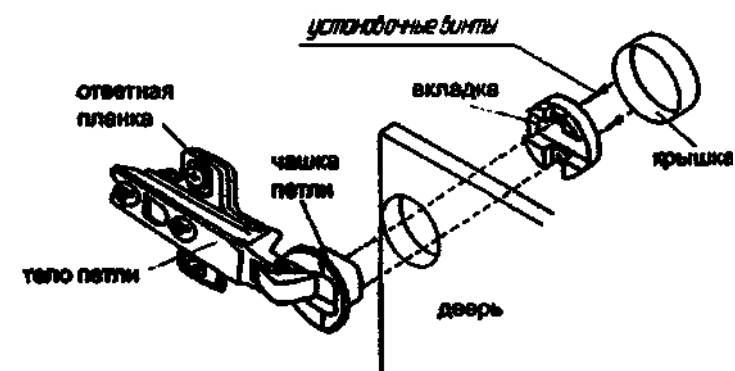


Схема установки замка мебельного (при наличии)

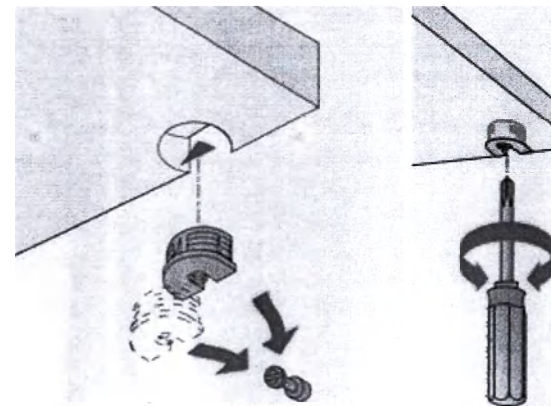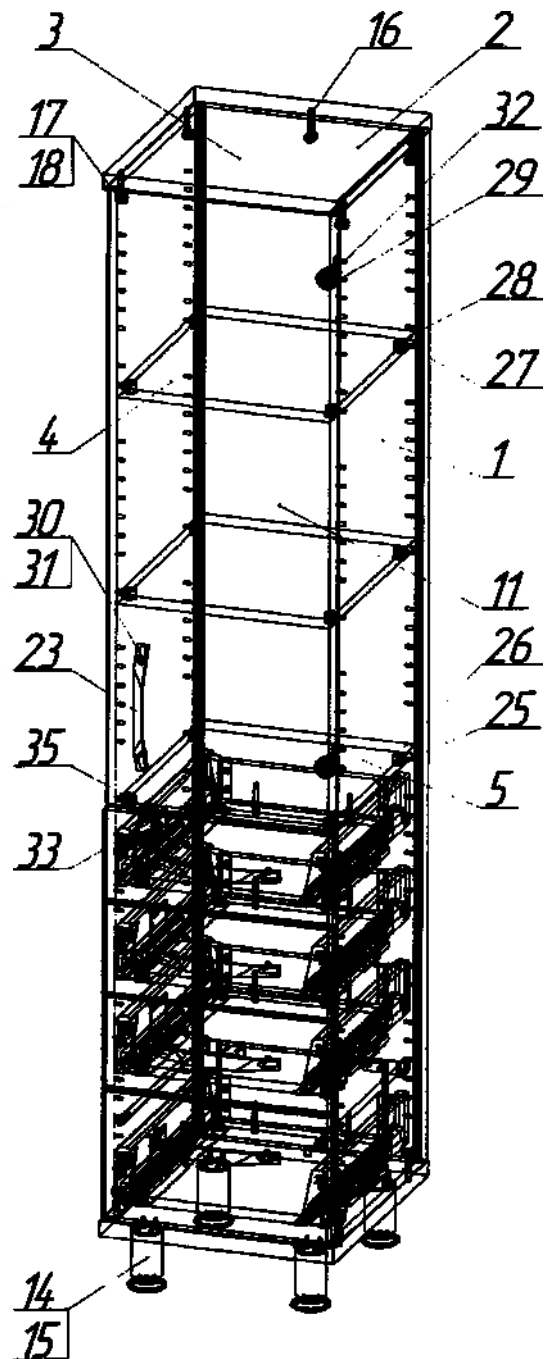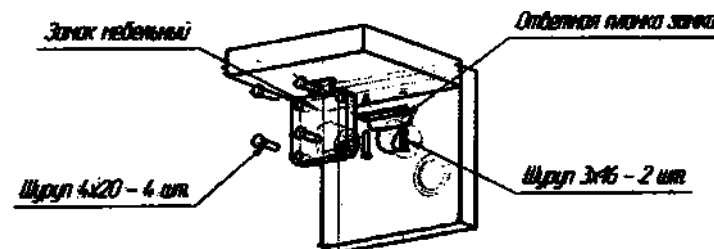

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-17 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 402±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-17		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция – с дверкой, оснащена двумя съемными полками ЛДСП, нижняя секция – четыре выдвижных ящика. Верхний ящик и дверка закрываются на замки.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
	Пакет №1:		
1.	Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель задней стенки		1 шт.
4.	Панель полки съемной		2 шт.
5.	Панель средняя		1 шт.
6.	Панель дверки		1 шт.
7.	Панель ящика нижняя		4 шт.
8.	Панель ящика задняя		3 шт.
9.	Панель ящика задняя большая		1 шт.
10.	Панель ящика фасадная		3 шт.
11.	Панель ящика фасадная большая		1 шт.
	Пакет №2:		
12.	Комплект ящика Unni		4 шт.
13.	Рейлинг продольный Unni		1 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
14.	Опора регулируемая		4 шт.
15.	Шуруп 4x20		24 шт.
16.	Шток эксцентрика		9 шт.
17.	Эксцентрик		9 шт.
18.	Заглушка эксцентрика		9 шт.
19.	Шуруп 3,5x16		52 шт.
20.	Ключ шестигранный		1 шт.
21.	Евровинт 7x50		8 шт.
22.	Саморез 4,2x13 с прессшайбой		40 шт.
23.	Ручка-скоба		5 шт.
24.	Шайба 4		10 шт.
25.	Шток эксцентрика усиленного		4 шт.
26.	Эксцентрик усиленный		4 шт.
27.	Винт полкодержателя		8 шт.
28.	Полкодержатель		8 шт.
29.	Петля 4-х шарнирная		2 шт.
30.	Шуруп 4x16		4 шт.
31.	Евровинт 6,3x13		4 шт.
32.	Замок		2 шт.

33.	Ключ от замка		4 шт.
34.	Шуруп 3x16		4 шт.
35.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.

2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (14) при помощи шурупов (15). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (16) до упора.

3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**

4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (17). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (20) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (18).

5. Установить заднюю стенку (3) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас модуля сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. При помощи саморезов (19) прикрепить направляющие Unni (12) к боковым панелям и панелям перегородок изделия в подготовленные наметки крепления.

8. При помощи саморезов (22) прикрепить боковые стенки Unni (12) к панели ящика нижней (7) так, чтобы со стороны, где к направляющим устанавливается панель фасадная ящика, панель ящика нижняя была на одном уровне с боковыми стенками Unni (12).

9. Вставить держатели задней стенки направляющих Unni (12) в боковые стенки Unni (12). При помощи саморезов (19) прикрепить панель ящика заднюю (8,9) к держателям задней стенки направляющих Unniholder (12). Затем закрутить евровинты (21) в подготовленные отверстия панели ящика нижней (7).

10. При помощи шурупов (19) прикрепить к панели фасадной ящика (10,11) держатели, для этого необходимо использовать наметки на панели.

11. Отрегулировать ящики согласно схеме регулировки.

12. В подготовленные отверстия установить ручку (23) на панель ящика фасадную (10,11) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (24).

13. При помощи подготовленных отверстий в панели фасадной нижнего ящика (11), установить рейлинг продольный Unni (13) и закрепить его к панели ящика задней (9) при помощи шурупов (19).

14. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (29) на панель дверки (6), двумя шурупами (30) каждую.

15. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (31), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

16. Отрегулировать положение панели дверки и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).



17. Установить ручку (23) на панель дверки (6) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (24).

18. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (25). Вставить эксцентрик усиленный (26) в подготовленные отверстия средней панели (5) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.

18. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (27) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (28) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.


19. Установить в подготовленное отверстие верхнего ящика и дверки (6) замок мебельный (32). Закрепить его шурупами (15). К верхней панели (2) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (34).

20. Шкаф готов к эксплуатации.

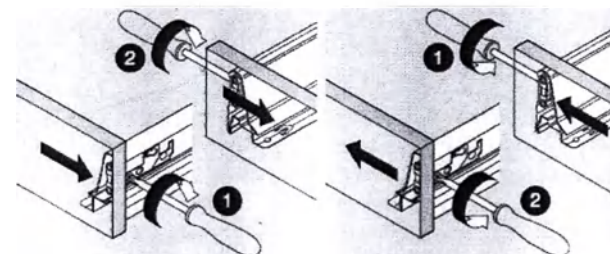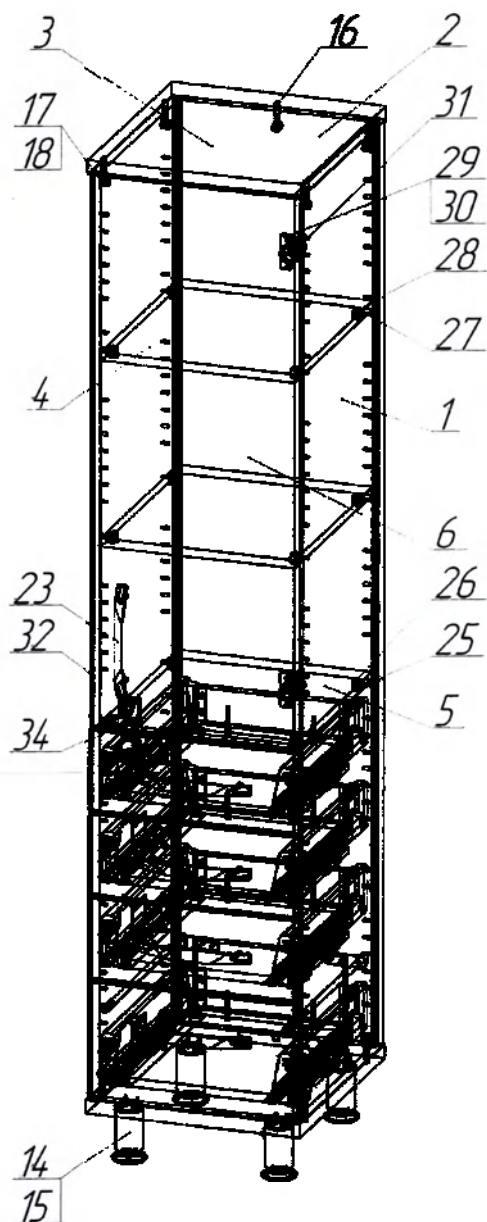


Регулировка по ширине: вправо
1 мм

Регулировка по ширине: влево
1 мм

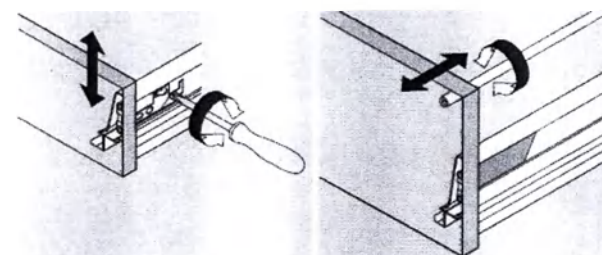


Регулировка по высоте: ± 2 мм

Регулировка наклона

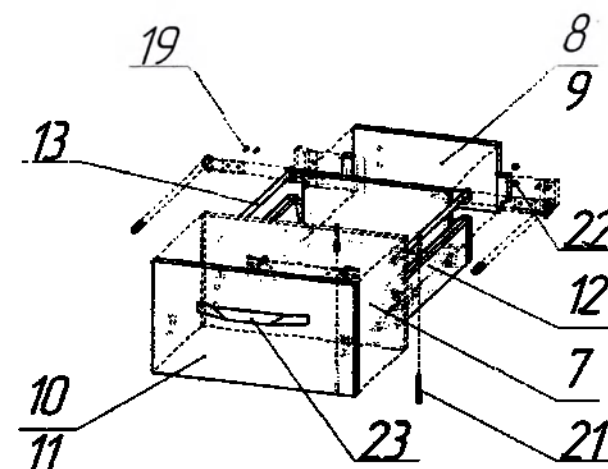

Порядок регулировки 4-х шарнирной петли

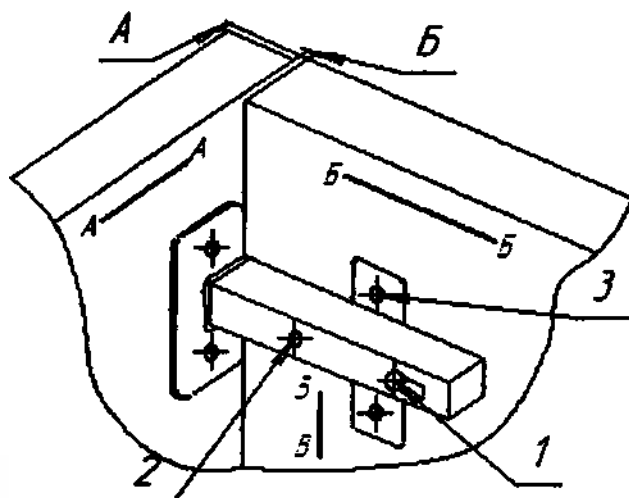

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулирующим винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверьми – 3 мм.
Во избежании поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.


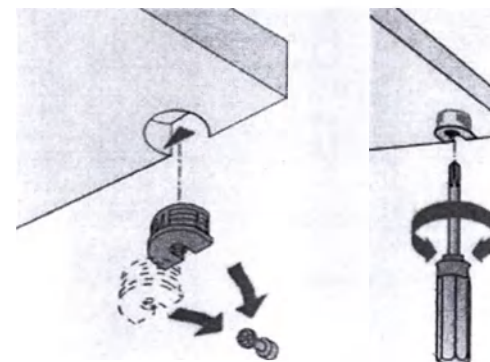


Схема установки замка медельного (при наличии)

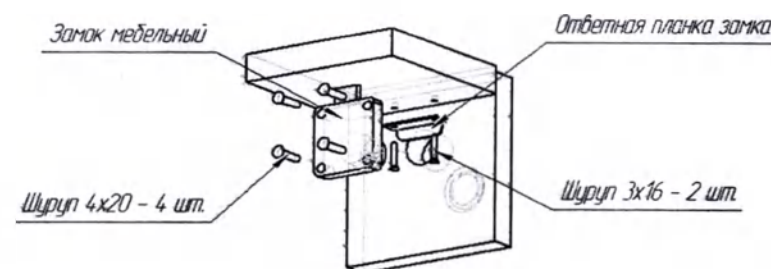

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-18 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 402±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-18		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция – с дверкой, оснащена съемной полкой ЛДСП, нижняя секция – четыре выдвижных ящика. Средняя секция - открытая ниша. Верхний ящик и дверка закрываются на замок.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
Пакет №1:			
1.	Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель задней стенки		1 шт.
4.	Панель полки съемной		1 шт.
5.	Панель средняя		2 шт.
6.	Панель дверки		1 шт.
7.	Панель ящика нижняя		4 шт.
8.	Панель ящика задняя		3 шт.
9.	Панель ящика задняя большая		1 шт.
10.	Панель ящика фасадная		3 шт.
11.	Панель ящика фасадная большая		1 шт.
Пакет №2:			
12.	Комплект ящика Unni		4 шт.
13.	Рейлинг продольный Unni		1 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
14.	Опора регулируемая		4 шт.
15.	Шуруп 4x20		24 шт.
16.	Шток эксцентрика		9 шт.
17.	Эксцентрик		9 шт.
18.	Заглушка эксцентрика		9 шт.
19.	Шуруп 3,5x16		52 шт.
20.	Ключ шестигранный		1 шт.
21.	Евровинт 7x50		8 шт.
22.	Саморез 4,2x13 с прессшайбой		40 шт.
23.	Ручка-скоба		5 шт.
24.	Шайба 4		10 шт.
25.	Шток эксцентрика усиленного		8 шт.
26.	Эксцентрик усиленный		8 шт.
27.	Винт полкодержателя		4 шт.
28.	Полкодержатель		4 шт.
29.	Петля 4-х шарнирная		2 шт.
30.	Шуруп 4x16		4 шт.
31.	Евровинт 6,3x13		4 шт.
32.	Замок		2 шт.

33.	Ключ от замка		4 шт.
34.	Шуруп 3x16		4 шт.
35.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (14) при помощи шурупов (15). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (16) до упора.
3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**
4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (17). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (20) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (18).
5. Установить заднюю стенку (3) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.
6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас модуля сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**
7. При помощи саморезов (19) прикрепить направляющие Unni (12) к боковым панелям и панелям перегородок изделия в подготовленные наметки крепления.
8. При помощи саморезов (22) прикрепить боковые стенки Unni (12) к панели ящика нижней (7) так, чтобы со стороны, где к направляющим устанавливается панель фасадная ящика, панель ящика нижняя была на одном уровне с боковыми стенками Unni (12).

9. Вставить держатели задней стенки направляющих Unni (12) в боковые стенки Unni (12). При помощи саморезов (19) прикрепить панель ящика заднюю (8,9) к держателям задней стенки направляющих Unni (12). Затем закрутить евровинты (21) в подготовленные отверстия панели ящика нижней (7).

10. При помощи шурупов (19) прикрепить к панели фасадной ящика (10,11) держатели, для этого необходимо использовать наметки на панели.

11. Отрегулировать ящики согласно схеме регулировки.

12. В подготовленные отверстия установить ручку (23) на панель ящика фасадную (10,11) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (24).

13. При помощи подготовленных отверстий в панели фасадной нижнего ящика (11), установить рейлинг продольный Unnihopper (13) и закрепить его к панели ящика задней (9) при помощи шурупов (19).

14. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (29) на панель дверки (6), двумя шурупами (30) каждую.

15. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (31), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

16. Отрегулировать положение панели дверки и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).




17. Установить ручку (23) на панель дверки (6) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (24).

18. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (25). Вставить эксцентрик усиленный (26) в подготовленные отверстия средней панели (5) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.


18. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (27) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (28) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.

19. Установить в подготовленное отверстие верхнего ящика и дверки (6) замок мебельный (32). Закрепить его шурупами (15). К верхней панели (2) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (34).


20. Шкаф готов к эксплуатации.

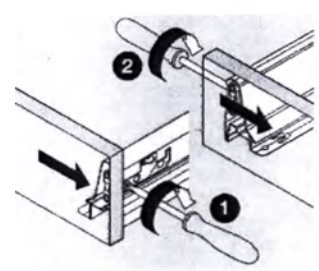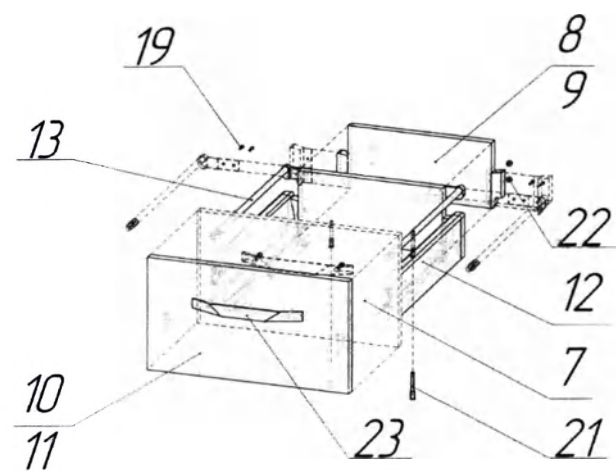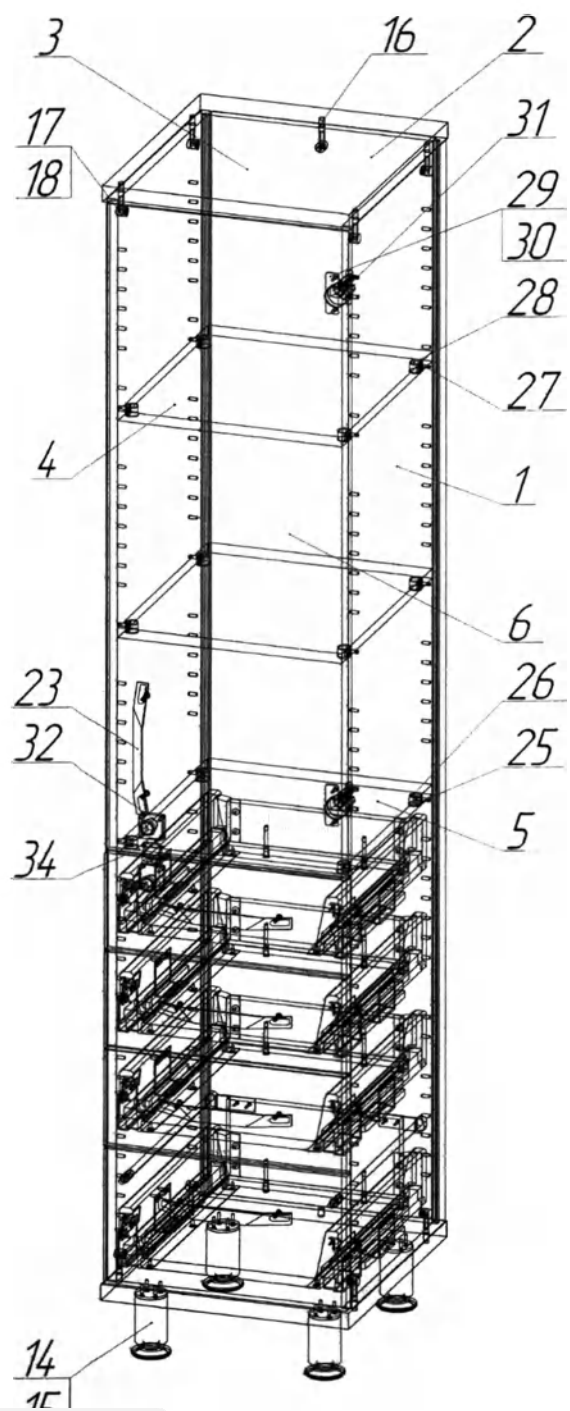


Регулировка по ширине: вправо
1 мм

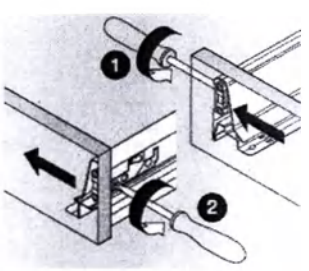

Регулировка по ширине: влево
1 мм

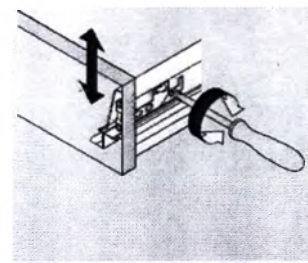


Регулировка по высоте: ± 2 мм

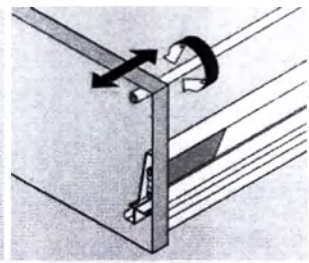

Регулировка наклона

Порядок регулировки 4-х шарнирной петли

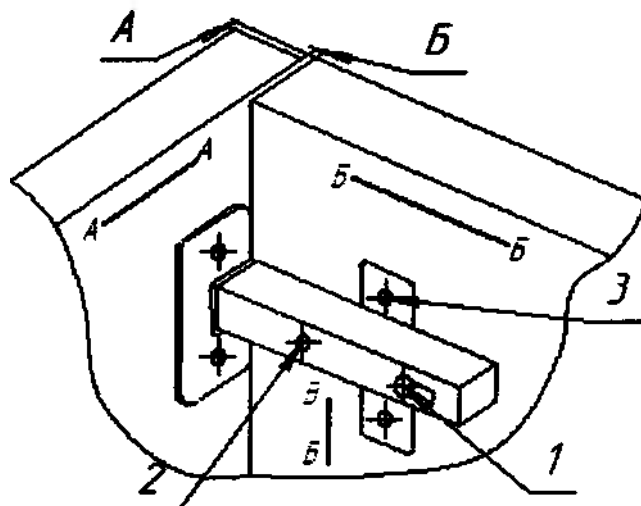

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планка петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями - 3 мм.
Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.


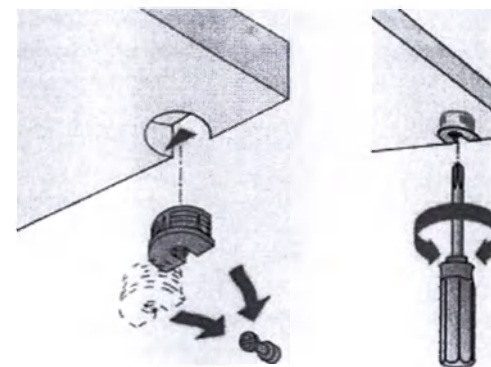


Схема установки замка медельного (при наличии)

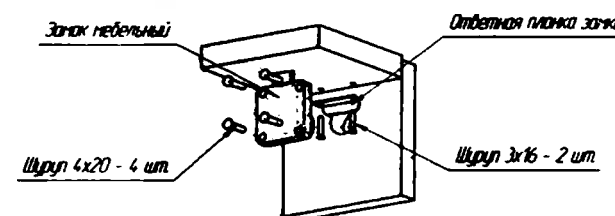

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-19 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 402±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-19		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. С дверками, оснащен четырьмя полками ЛДСП, три из которых съемные. Дверки закрываются на замки.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
1.	Пакет №1: Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель задней стенки		1 шт.
4.	Панель средняя		1 шт.
5.	Панель полки съемной		3 шт.
6.	Панель дверки		1 шт.
7.	Опора регулируемая		4 шт.
8.	Шуруп 4x20		20 шт.
9.	Шток эксцентрика		9 шт.
10.	Эксцентрик		9 шт.
11.	Заглушка эксцентрика		9 шт.
12.	Винт полкодержателя		12 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
13.	Полкодержатель		12 шт.
14.	Шток эксцентрика усиленного		4 шт.
15.	Эксцентрик усиленный		4 шт.
16.	Ключ шестигранный		1 шт.
17.	Петля 4-х шарнирная		3 шт.
18.	Шуруп 4x16		6 шт.
19.	Евровинт 6,3x13		6 шт.
20.	Ручка-скоба		1 шт.
21.	Шайба 4		2 шт.
22.	Замок		1 шт.
23.	Ключ от замка		2 шт.
24.	Шуруп 3x16		2 шт.
25.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (7) при помощи шурупов (8). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (9) до упора.
3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**
4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (10). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (16) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики

заглушками (11).

5. Установить заднюю стенку (3) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас модуля сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (12) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (13) в подготовленные отверстия полки (5) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.

8. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (14). Вставить эксцентрик усиленный (15) в подготовленные отверстия средней панели (4) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.

9. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (17) на панель дверки (6), двумя шурупами (18) каждую.

10. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (19), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.


11. Отрегулировать положение панелей дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).

12. Установить ручку (20) на панель дверки (6) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (21).

13. Установить в подготовленное отверстие замок мебельный (22). Закрепить его шурупами (8). К средней панели (4) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (24).

14. Шкаф готов к эксплуатации.

Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

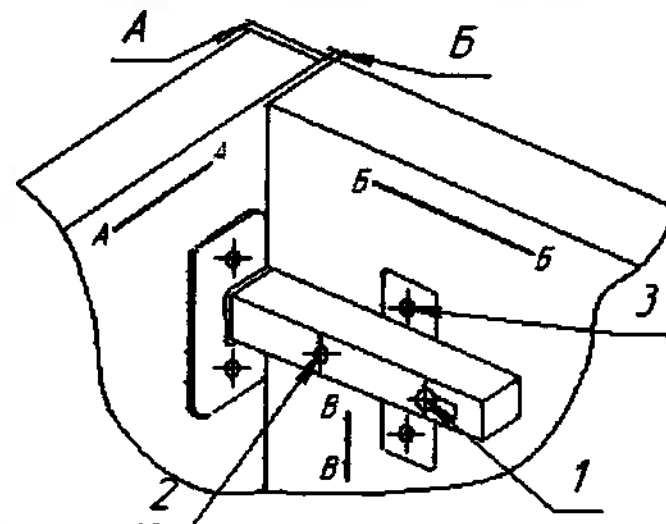

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверью – 3 мм.
Во избежание поломки петлю открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.



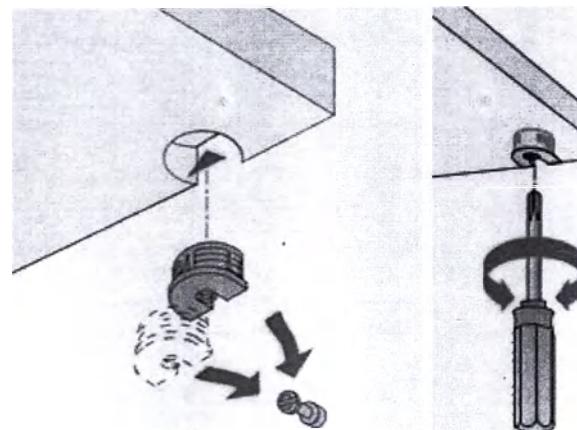


Схема установки замка мебельного (при наличии)

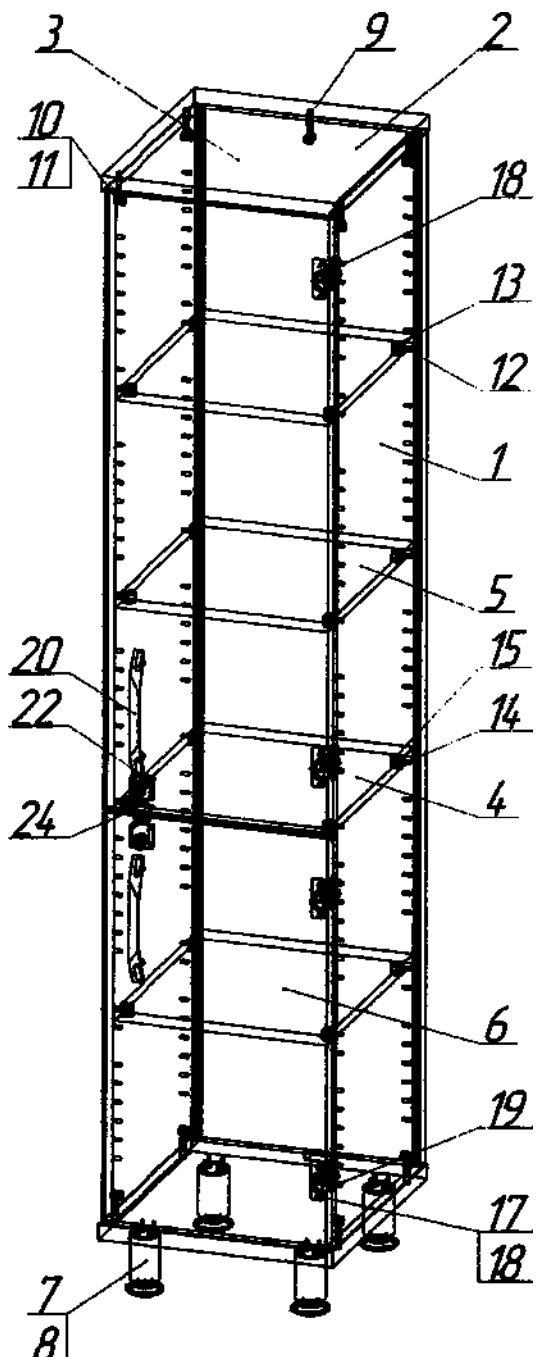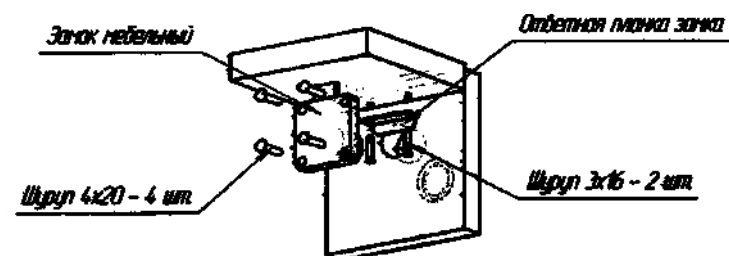

1. Назначение и конструкция

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш 1.01 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств, стерильных расходных материалов, медицинских инструментов и прочих изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:


Ширина 450 ± 5 мм, глубина 459 ± 5 мм, высота 1850 ± 5 мм.

3. Комплектность поставки

Пакет №1

1. Панель верхняя – 1 шт.
2. Панель правая – 1 шт.
3. Панель левая – 1 шт.
4. Панель средняя – 1 шт.
5. Панель нижняя – 1 шт.
6. Стенка задняя – 1 шт.
7. Полки – 3 шт.
8. Дверь стеклянная в рамке – 1 шт.
9. Дверь нижняя – 1 шт.
10. Полкодержатели – 12 шт.
11. Винт конфирмат – 12 шт.
 - 11.1 Заглушка конфирмата – 12 шт.
 - 11.2 Ключ конфирмата – 1 шт.
12. Евровинт 6,3x13 – 8 шт.
13. Ручка полускоба – 1 шт.
14. Ручка скоба – 1 шт.
15. Опора регулируемая – 4 шт.
16. Петля 4-х шарнирная – 2 шт.
17. Петля для ИТВ для стеклянной двери – 2 шт.
18. Винт 4x25 – 1 шт.
19. Шуруп 4x16 – 4 шт.
20. Гвоздь – 46 шт.
21. Шкант мебельный – 12 шт.
22. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
23. Замок – 1 шт.


Порядок регулировки 4-х шарнирной петли

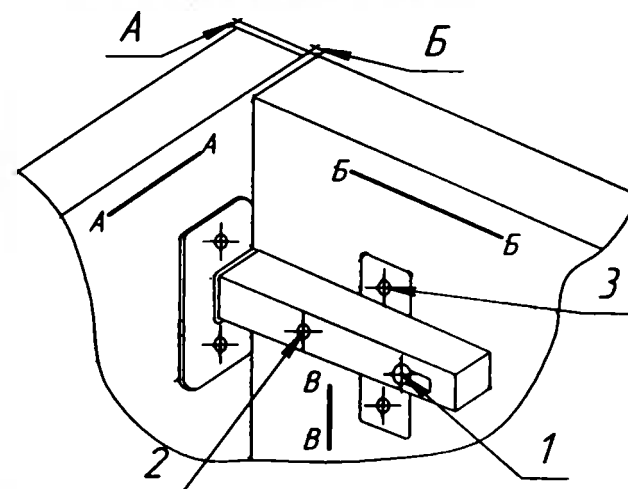

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения двери в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулирующим винтом 2 дверь перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения двери по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли заворачиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями – 3 мм.
Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

- 24. Ключ к замку - 2 шт.
- 25. Шуруп 3x16 - 2 шт.
- 26. Винт 4x10 - 4 шт.
- 27. Шуруп 4x20 - 20 шт.

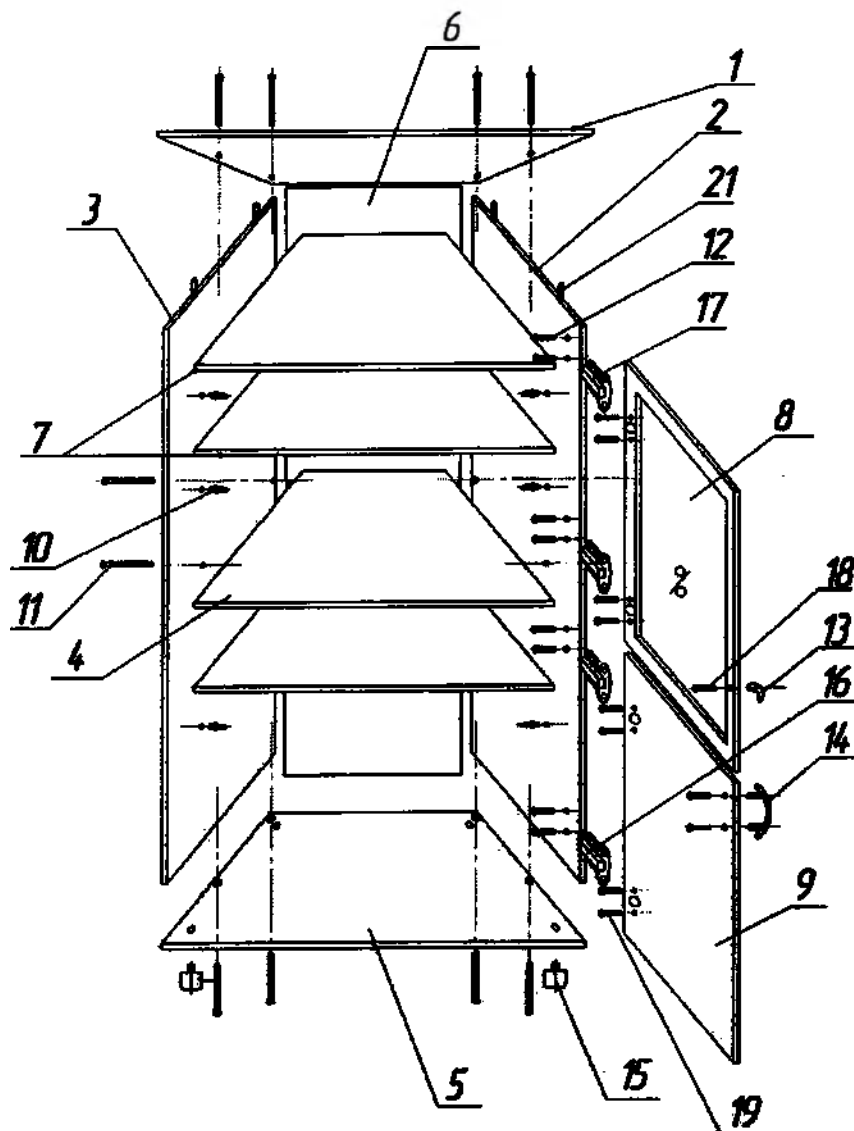

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Установить шканты (21) в подготовленные глухие отверстия диаметром 8 мм, до упора при помощи молотка (**в отверстия диаметром 5 мм шканты не вставлять**). По 2 шканта в необлицованные торцы панелей (2,3,4).
3. Собрать между собой панель среднюю (4) и панели правую (2) и левую (3) при помощи винтов (11). Шканты (21) должны войти в подготовленные отверстия на панелях (2,3). При этом облицованные поверхности панелей должны находиться с одной стороны.
4. Собрать каркас изделия, закрепив боковые стенки (2,3) через подготовленные отверстия винтами 7x50 (11) к панелям – верхней (1), нижней (5). Шканты (21) должны войти в подготовленные отверстия на панелях (1,5). При этом облицованные поверхности панелей должны находиться с лицевой стороны изделия.
5. Установить и прикрепить 4х-шарнирные петли (16) на дверку (9), двумя шурупами 4x16 (19) каждую в подготовленные отверстия. Установить и прикрепить петли ГТВ (17) на дверку (8), двумя винтами каждую, идущими в комплекте, в подготовленные отверстия.
6. Каркас изделия перевернуть на правую боковую панель. Около облицованного торца боковой панели положить панели дверок (8,9), зазор между ними 2-3 мм. Закрепить евровинтами 6,3x13 (12) петли в сборе к боковой панели.
7. Закрепить опоры (15) при помощи шурупов (27).
8. **Осторожно** (при помощи 2х сборщиков) установить изделия в рабочее положение. Закрепить на боковых и горизонтальных панелях шкафа заднюю стенку (6) гвоздями через расстояние 100 мм.
9. Отрегулировать положение дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли.
10. Прикрепить ручки (14) к нижним дверкам через подготовленные отверстия при помощи винтов идущих в комплекте, ручку (13) при помощи винтов (18) на дверке верхней.
11. Вставить полкодержатели (10) в подготовленные отверстия и уложить на них полки (7). Закрепить винты заглушками (11.1).
12. Установить замок.
13. Шкаф готов к работе.

1. Назначение и конструкция

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш 1.02 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств, стерильных расходных материалов, медицинских инструментов и прочих изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры модуля:

Ширина 450 ± 5 мм, глубина 459 ± 5 мм, Высота 1850 ± 5 мм

3. Комплект поставки


Пакет №1

- Шкаф – 1 шт.
- Винт 4x25 – 1 шт.
- Винт 4x35 – 8 шт.
- Ручка-полускоба – 1 шт.
- Ручка-скоба – 4 шт.
- Опора регулируемая – 4 шт.
- Полка верхней секции - 2 шт.
- Замок - 1 шт.
- Ключ к замку - 1 шт.
- Шуруп 3x16 - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Полкодержатель - 8 шт.
- Заглушка к евровинту - 6 шт.
- Шуруп 4x20 - 20 шт.

4. Инструкция по сборке

- ✓ Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
- ✓ Вынуть ящики и полки из изделия.
- ✓ Перевернуть изделие на бок и закрепить опоры при помощи шурупов 4x20. Осторожно (при помощи 2х сборщиков) поставить изделие одновременно на все ножки.
- ✓ Установить ручки-скобы на ящиках при помощи винтов 4x35. Закрепить ручку-полускобу на верхней дверке через подготовленные отверстия винтами 4x25.


Порядок регулировки
4-х шарнирной петли

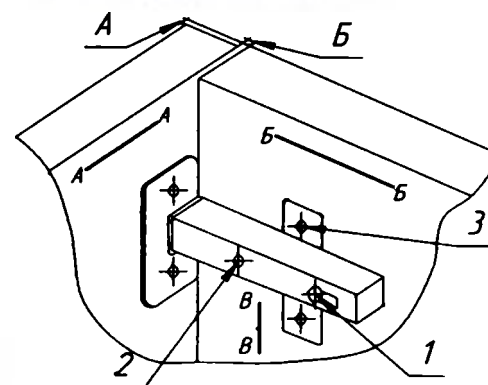

Регулировка петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулирующим винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями – 3 мм.
Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

Схема установки замка мебельного (при наличии)

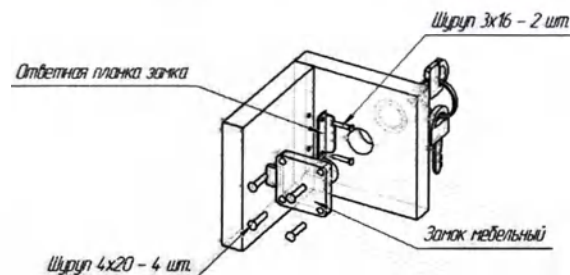

1. Установить в подготовленные отверстия замок мебельный;
2. Закрепить шурупы 4x20 – 4 шт.;
3. К боковой стенки прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов 3x16 – 2 шт.

- ✓ Уложить полки на полкодержатели.
- ✓ Установить замок (см. схему).
- ✓ Шкаф готов к работе.



1. Назначение и конструкция

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш 1.03 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств, стерильных расходных материалов, медицинских инструментов и прочих изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:


Ширина 450 ± 5 мм, глубина 460 ± 5 мм, Высота 1850 ± 5 мм

3. Комплектность поставки

Пакет №1

1. Панель верхняя – 1 шт.
2. Панель правая - 1 шт.
3. Панель левая – 1 шт.
4. Панель средняя – 1 шт.
5. Панель нижняя – 1 шт.
6. Дверь верхняя – 1 шт.
7. Дверь нижняя -1 шт.
8. Стенка задняя – 1 шт.
9. Полки – 3 шт.
10. Полкодержатели – 12 шт.
11. Винт конфирмат – 12 шт.
- 11.1 Заглушка конфирмата - 12 шт.
- 11.2 Ключ конфирмата – 1 шт.
12. Евровинт 6,3х13 – 8 шт.
13. Ручка скоба – 2 шт.
14. Опора регулируемая – 4 шт.
15. Петля 4-х шарнирная – 4 шт.
16. Шуруп 4х16 – 8 шт.
17. Гвоздь – 45 шт.
18. Шкант мебельный – 12 шт.
19. Замок - 2 шт
20. Ключ к замку - 4 шт.
21. Шуруп 3х16 - 4 шт.
22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

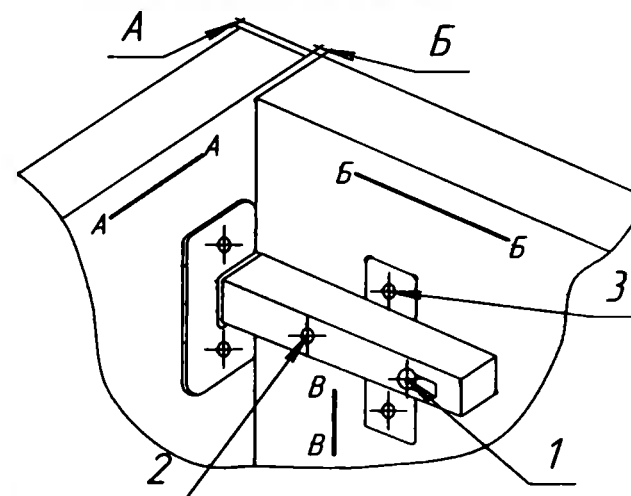

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулирующим винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверью – 3 мм. Во избежание поломки петлю открывать и закрывать дверь следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

4. Инструкция по сборке.

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Установить шканты (18) в подготовленные глухие отверстия диаметром 8 мм, до упора при помощи молотка (**в отверстия диаметром 5 мм шканты не вставлять**). По 2 шканта в необлицованные торцы панелей (2,3,4).
3. Собрать между собой панель среднюю (4) и панели правую (2) и левую (3) при помощи винтов (11). Шканты (18) должны войти в подготовленные отверстия на панелях (2,3). При этом облицованные поверхности панелей должны находиться с одной стороны.
4. Собрать каркас, закрепив боковые стенки (2,3) через подготовленные отверстия винтами 7x50 (11) к панелям – верхней (1), нижней (5). Шканты (18) должны войти в подготовленные отверстия на панелях (1,5). При этом облицованные поверхности панелей должны находиться с лицевой стороны изделия.
5. Установить и прикрепить 4х-шарнирные петли (15) на дверки (6,7), двумя шурупами 4x16 (16) каждую в подготовленные отверстия.
6. Каркас изделия перевернуть на правую боковую панель. Около облицованного торца боковой панели положить панели дверок (6,7), зазор между ними 2-3 мм. Закрепить евровинтами 6,3x13 (12) петли в сборе к боковой панели.
7. Установить в панель нижнюю (5) опоры (14) при помощи шурупов (23).
8. **Осторожно** (при помощи 2х сборщиков) установить изделие в рабочее положение. Закрепить на боковых и горизонтальных панелях шкафа заднюю стенку (8) гвоздями через расстояние 100 мм.
9. Отрегулировать положение дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли.
10. Прикрепить ручки (13) к дверкам через подготовленные отверстия при помощи винтов идущих в комплекте.
11. Вставить полкодержатели (10) в подготовленные отверстия и уложить на них полки (9). Закрыть винты заглушками (11.1).
12. Установить замки.
13. Шкаф готов к эксплуатации.

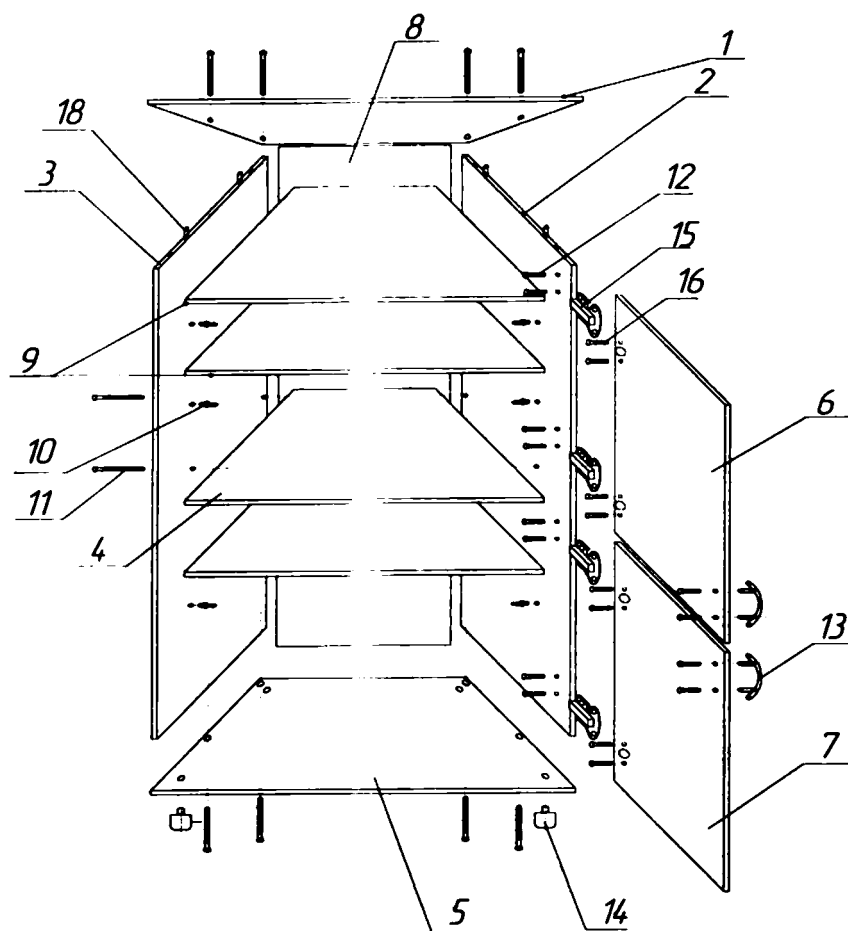


Схема сборки

Приложение 17
к руководству по эксплуатации ШДЛ1.152016.001 РЭ
1. Назначение и конструкция

Шкаф для хранения лекарственных средств МКП 014 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:



Ширина 450±5 мм, глубина 403±5 мм, высота 1705±10 мм

2. Комплект поставки.

1.	Панель боковая	— 2 шт.
2.	Панель горизонтальная	— 2 шт.
3.	Панель средняя	— 1 шт.
4.	Панель дверки	— 1 шт.
5.	Панель полки	— 4 шт.
6.	Панель задней стенки	— 1 шт.
7.	Винт конфирмат 7x50	— 12 шт.
8.	Заглушка винта	— 12 шт.
9.	Петля 4-х шарнирная	— 2 шт.
10.	Ручка-скоба	— 1 к.
11.	Полкодержатель	— 16 шт.
12.	Опора регулируемая	— 4 шт.
13.	Шуруп 4x16	— 20 шт.
14.	Евровинт 6,3x13	— 4 шт.
15.	Гвоздь 2x20	— 55 шт.
16.	Ключ шестигранный	— 1 шт.
17.	Шкант мебельный	— 12 шт.
18.	Руководство по эксплуатации	— 1 шт.
19.	Замок	— 1 шт.
20.	Ключ к замку	— 2 шт.
21.	Шуруп 3x16	— 2 шт.
22.	Шуруп 4x20	— 4 шт.

3. Инструкция по сборке.

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Установить шканты (17) в подготовленные глухие отверстия диаметром 8 мм, до упора при помощи молотка (**в отверстия диаметром 5 мм шканты не вставлять**). По 2 шканта в необлицованные торцы горизонтальных панелей (2; 3).
3. Собрать каркас изделия, закрепив боковые стенки (1) через подготовленные отверстия евровинтами 7x50 (7) к гориз. панелям – верхней, нижней и средней (2; 3). Шканты (17) должны войти в подготовленные отверстия на панелях боковых. При этом облицованные поверхности панелей должны находиться с лицевой стороны изделия.
4. Установить на панель горизонтальную нижнюю (2) опоры (12) при помощи шурупов 4x16 (13).
5. Установить и прикрепить шарнирные петли (9) на дверку (4), двумя шурупами 4x16 (13) каждую.
6. Каркас перевернуть на правую боковую панель. Около облицованного торца боковой панели положить панель дверки (4). Закрепить евровинтами 6,3x13 (14) петли в сборе к боковой панели.
7. **Осторожно** (при помощи 2-х сборщиков) установить изделие в рабочее положение. Закрепить на боковых стенках и горизонтальных панелях шкафа гвоздями через расстояние 100мм.
8. Прикрепить ручку к дверке (4) через подготовленные отверстия при помощи винтов.
9. Вставить полкодержатели (11) в подготовленные отверстия и уложить на них полки. Закрыть винты заглушками.
10. Установить замок (см. схему).
11. Шкаф готов к работе.

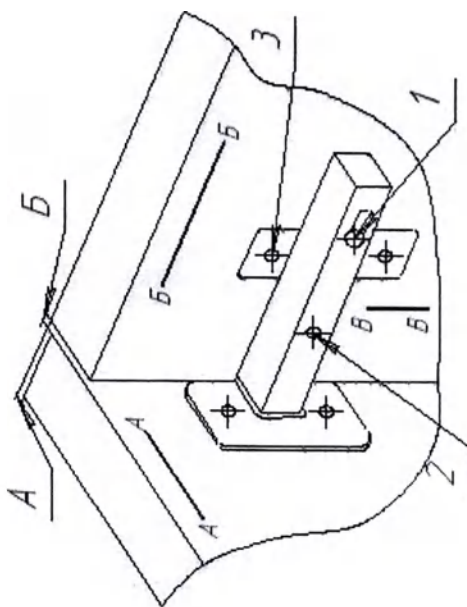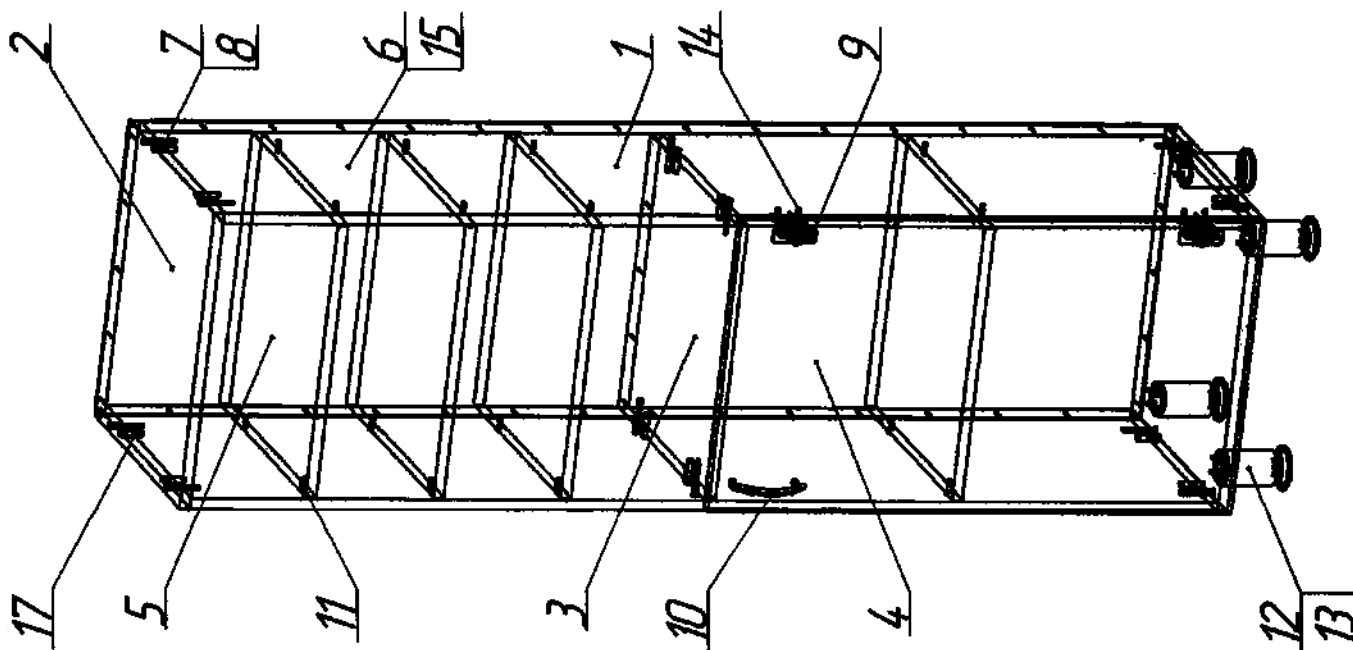

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и В-В и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1 Ослабляется винт, что дает возможность перемещения дверки в направлении по стрелкам В-В, изменяя размер "Б".


2 Регулирующим винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".

3 Ослабив шурупы 3 планка петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.

4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли заворачиваются до отказа.

5. Предусмотренный зазор между дверками - 3 мм. Во избежание поломки петель открывать и закрывать дверки следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

Схема установки петель на шкафчик

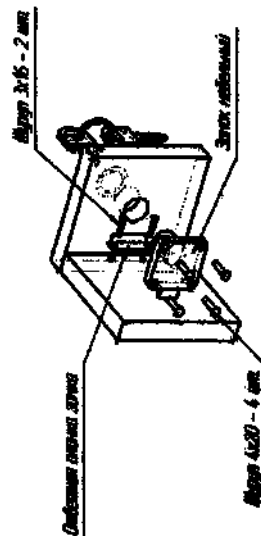

1. Изготавливается с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и В-В и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

2. Регулирующим винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".

3. Ослабив шурупы 3 планка петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.

4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли заворачиваются до отказа.

5. Предусмотренный зазор между дверками - 3 мм. Во избежание поломки петель открывать и закрывать дверки следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

1. Назначение и конструкция

Шкаф для хранения лекарственных средств МКП 014/01 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание


Габаритные размеры:

Ширина 450±5 мм, глубина 403±5 мм, высота 1705±10 мм

2. Комплект поставки

Пакет №1

1. Боковая стенка	- 2 шт.
2. Панель горизонтальная	- 2 шт.
3. Панель средняя	- 1 шт.
4. Полка ЛДСП	- 1 шт.
5. Задняя стенка	- 1 шт.
6. Дверка ЛДСП	- 1 шт.
7. Винт конфирмат 7x50	- 14 шт.
8. Заглушка винта	- 14 шт.
9. Ручка – скоба	- 1 шт.
10. Евровинт 6,3x13	- 4 шт.
11. Полкодержатель	- 16 шт.
12. Шуруп 4x16	- 20 шт.
13. Петля 4-х шарнирная	- 2 шт.
14. Петля правая для стеклянной дверки	- 1 шт.
15. Петля левая для стеклянной дверки	- 1 шт.
16. Ручка для стеклянной дверки	- 1 шт.
17. Магнитный держатель	- 1 шт.
18. Шуруп 3x16	- 2 шт.
19. Гвоздь 2x20	- 40 шт.
20. Ключ шестигранный	- 1 шт.
21. Шкант мебельный	- 12 шт.
22. Опора регулируемая	- 4 шт.
23. Замок	- 1 шт.
24. Ключ к замку	- 1 шт.
25. Шуруп 4x20	- 4 шт.
26. Руководство по эксплуатации	- 1 шт.

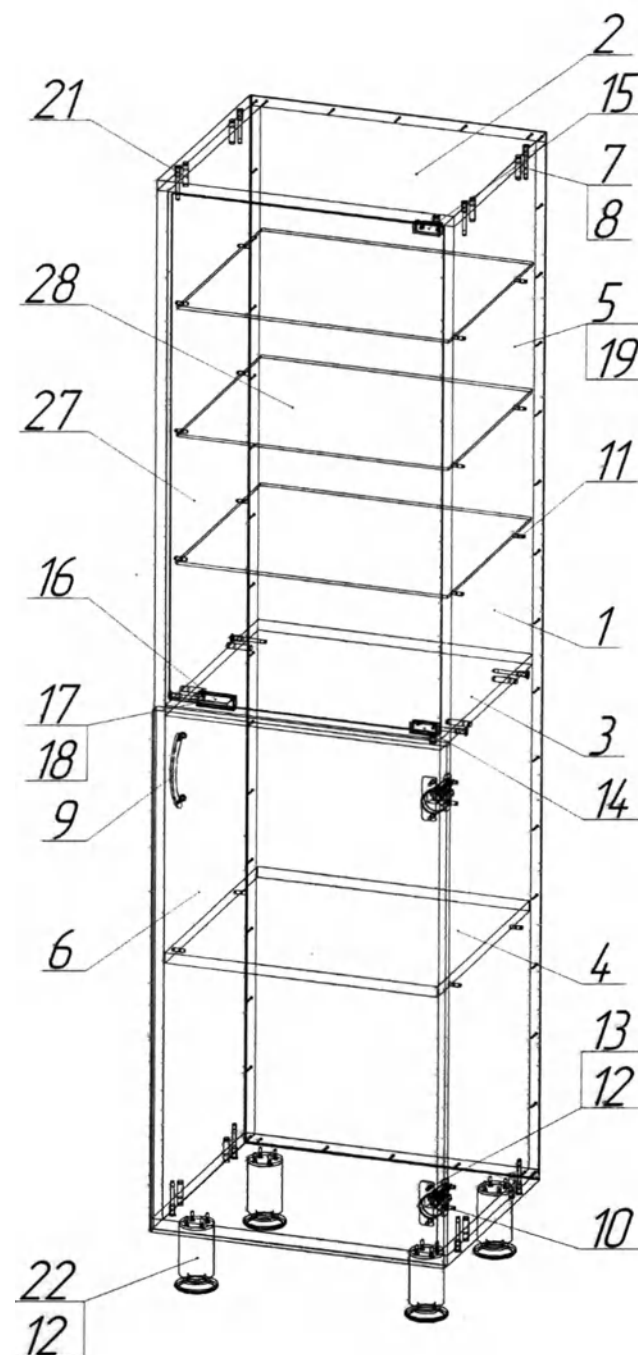


Пакет №2

27. Дверка стекло
28. Полка стекло

- 1 шт.
- 3 шт.


Порядок регулирования
4-х шарнирной петли

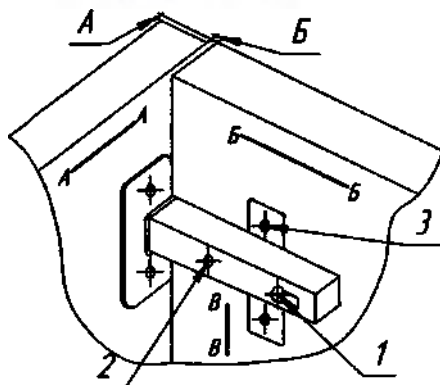

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулирующим винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винты 1 и шурупы планки петли заворачиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями - 3 мм. Во избежание поломки петлей открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шпинделя.

Схема установки замка медельного типа (наличий)

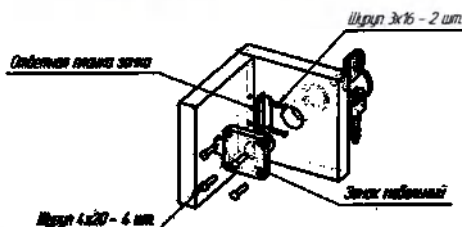

1. Установить в подготовленные отверстия замок медельный.
2. Закрепить шурупы 4x20 - 4 шт.
3. К боковой стенке прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов 3x16 - 2 шт.

3. Инструкция по сборке.

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Установить шканты (21) в подготовленные глухие отверстия диаметром 8 мм, до упора при помощи молотка (**в отверстия диаметром 5 мм шканты не вставлять**). По 2 шканта в необлицованные торцы горизонтальных панелей (2).
3. Собрать каркас изделия, закрепив боковые стенки (1) через подготовленные отверстия евровинтами 7x50 (7) к горизонтальным панелям - верхней, нижней (2) и средней (3). Шканты (21) должны войти в подготовленные отверстия на панелях боковых. При этом облицованные поверхности панелей должны находиться с лицевой стороны изделия.
4. Установить на панель горизонтальную нижнюю (2) опоры (22) при помощи шурупов 4x16 (20).
5. Установить и прикрепить шарнирные петли (13) на дверку (6), двумя шурупами 4x16 (12) каждую.
6. Каркас перевернуть на правую боковую панель. Около облицованного торца боковой панели положить панель дверки (6). Закрепить евровинтами 6,3x13 (10) петли в сборе к боковой панели.
7. **Осторожно** (при помощи 2-х сборщиков) установить изделие в рабочее положение. Закрепить на боковых стенках и горизонтальных панелях шкафа гвоздями через расстояние 100 мм.
8. Прикрепить ручку (9) к дверке (6) через подготовленные отверстия при помощи винтов.
9. Вставить в отверстия верхней и средней панелей пластмассовые втулки (14, 15) под оси петель стеклянной дверки.
10. Установить петли (14, 15) стеклянной дверки во втулки, при этом крепежные винты должны быть внутри.
11. Вложить в петли по два узких пластиковых вкладыша.
12. Вставить стеклянную дверку (27) в петли между пластиковыми вкладышами. Передвигая стекло в петлях, отрегулировать зазор между дверкой и каркасом. Для надежной фиксации затянуть крепежные винты.
13. Вложить широкий пластиковый вкладыш в ручку стеклянной дверки.
14. Надеть ручку (16) на нижнюю кромку стеклянной дверки.
15. Установить на среднюю панель магнитный держатель (17) и закрепить его шурупами (18).
16. Вставить полкодержатели (11) в подготовленные отверстия и уложить на них полки. Закрепить винты заглушками (8).
17. Установить замок (см. схему).
18. Шкаф готов к работе.

1. Назначение и конструкция

Шкаф для хранения лекарственных средств МКП 014/02 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание


Габаритные размеры:

Ширина 450±5 мм, глубина 403±5 мм, высота 1705±10 мм

3. Комплект поставки


Пакет №1

1. Боковая стенка	- 2 шт.
2. Панель горизонтальная	- 3 шт.
3. Полка ЛДСП	- 4 шт.
4. Панель средняя	- 1 шт.
5. Задняя стенка	- 1 шт.
6. Дверка нижняя	- 1 шт.
7. Дверка верхняя	- 1 шт.
8. Винт конфирмат 7x50	- 14 шт.
9. Заглушка винта	- 14 шт.
10. Ручка-скоба	- 2 шт.
11. Полкодержатель	- 16 шт.
12. Опора регулируемая	- 4 шт.
13. Петля 4-х шарнирная	- 4 шт.
14. Шуруп 4x16	- 24 шт.
15. Евровинт 6,3x13	- 8 шт.
16. Гвоздь 2x20	- 55 шт.
17. Ключ шестигранный	- 1 шт.
18. Шкант мебельный	- 12 шт.
19. Замок	- 2 шт.
20. Ключ к замку	- 4 шт.
21. Шуруп 3x16	- 4 шт.

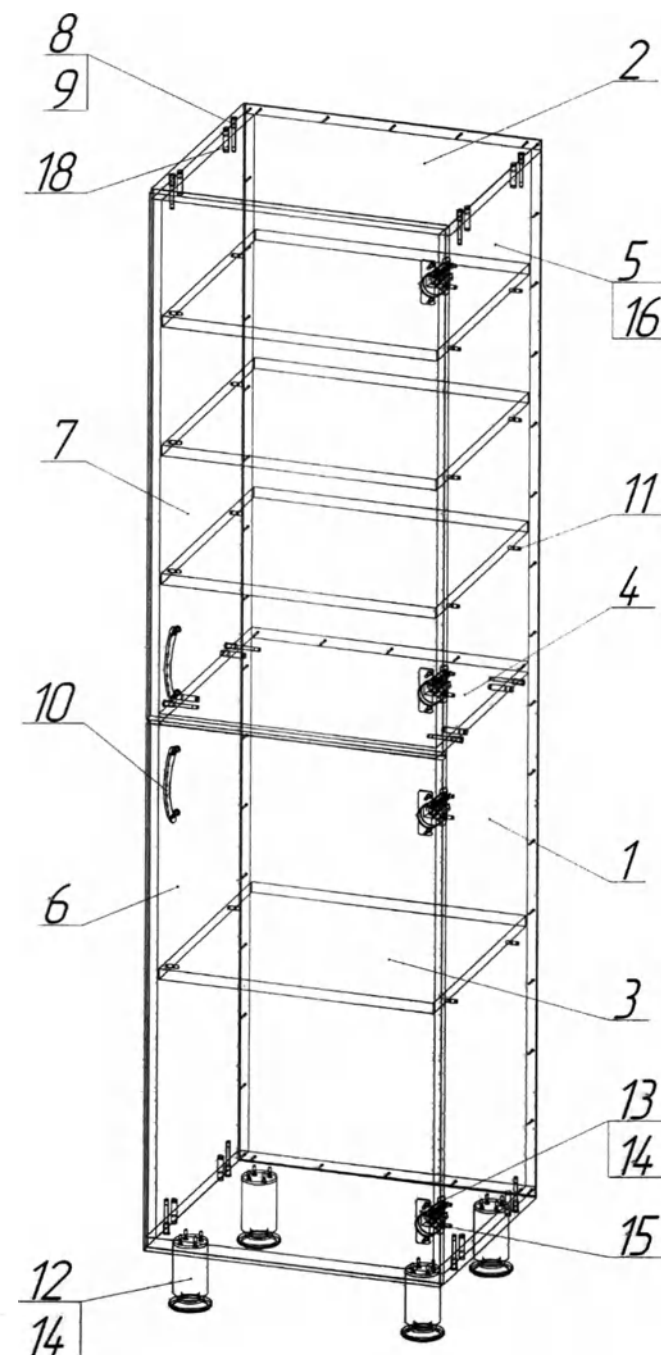

22. Руководство по эксплуатации - 1 шт.


23. Шуруп 4x20 - 8 шт.

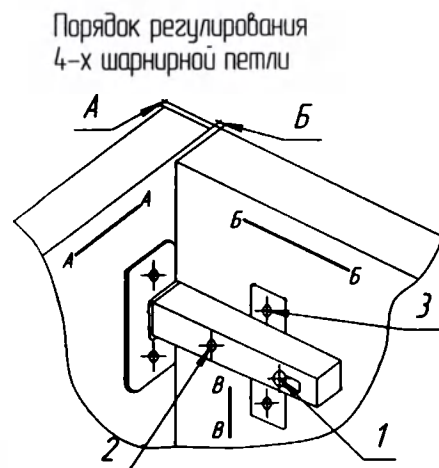

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулирующим винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шуруп 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями - 3 мм. Во избежание поломки петлей открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости петель.

Схема установки замка небельного при наличии

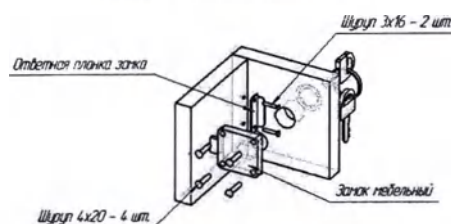

1. Установить в подготовленные отверстия замок небельный.
2. Закрепить шурупами 4x20 - 4 шт.
3. К нижней планке прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов 3x16 - 2 шт.

4. Инструкция по сборке.

1. Распаковать шкаф и комплектующие.
2. Установить шканты (18) в подготовленные глухие отверстия диаметром 8 мм, до упора при помощи молотка (**в отверстия диаметром 5 мм шканты не вставлять**). По 2 шканта в необлицованные торцы горизонтальных панелей (2).
3. Собрать каркас изделия, закрепив боковые стенки (1) через подготовленные отверстия винтами 7x50 (8) к горизонтальным панелям (2) - верхней, нижней и средней. Шканты (18) должны войти в подготовленные отверстия на панелях боковых. При этом облицованные поверхности панелей должны находиться с лицевой стороны изделия.
4. Установить на панель горизонтальную нижнюю (4) опоры (12) при помощи шурупов 4x16 (14).
5. Установить и прикрепить шарнирные петли (13) на дверки, двумя шурупами 4x16 (14) каждую.
6. Каркас перевернуть на правую боковую панель. Около торца боковой панели положить панели дверок (6,7). Верхнюю дверку выровнять по верхней горизонтальной панели. Между верхней дверкой и нижней предусмотреть зазор около 5 мм. Закрепить шурупами евровинтами 6,3x13 (15) петли в сборе к боковой панели.
7. **Осторожно** (при помощи 2-х сборщиков) установить изделие в рабочее положение. Закрепить заднюю стенку (5) на боковых стенках и горизонтальных панелях гвоздями через расстояние ≈100 мм.
8. Отрегулировать положение дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли.
9. Прикрепить винтами ручки (10) к дверкам подготовленные отверстия.
10. Вставить полкодержатели (11) в подготовленные отверстия и уложить на них полки (3).
11. Закрыть винты заглушками (9).
12. Установить замки (**см. схему**).
13. Шкаф готов к работе.

1. Назначение



Шкаф для хранения лекарственных средств в исполнениях: **ШК-2.1, ШК-2.2, ШК-2.3, ШК-2.4, ШК-2.5, ШК-2.6** (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 800±5 мм, глубина 400±5 мм, Высота 1850±10 мм

Исполнение	Внешний вид	Описание
ШК-2.1		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверки из HPL-пластика (запираются на замок), оснащена тремя съемными, регулируемыми полками из металла; нижняя секция - дверки из HPL-пластика (запираются на замок), оснащена съемной, регулируемой полкой из металла. Установлен на регулируемые опоры.
ШК-2.2		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверки из HPL-пластика со стеклянной вставкой (запираются на замок), оснащена тремя съемными, регулируемыми полками из HPL-пластика; нижняя секция - дверки из HPL-пластика (запираются на замок), оснащена съемной, регулируемой полкой из металла. Установлен на регулируемые опоры.

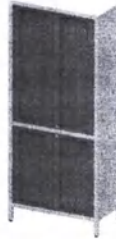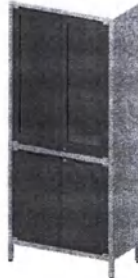Исполнение	Внешний вид	Описание
ШК-2.3		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверки из стекла, оснащена тремя съемными, регулируемыми полками металл; нижняя секция - дверки из HPL-пластика (запираются на замок), оснащена съемной, регулируемой полкой из металла. Установлен на регулируемые опоры.
ШК-2.4		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверки из металла (запираются на замок), оснащена тремя съемными, регулируемыми полками из металла; нижняя секция - дверки из металла (запираются на замок), оснащена съемной, регулируемой полкой из металла. Установлен на регулируемые опоры.
ШК-2.5		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверки из стекла, оснащена тремя съемными, регулируемыми полками из стекла; нижняя секция - дверки из металла (запираются на замок), оснащена съемной, регулируемой полкой из металла. Установлен на регулируемые опоры.
ШК-2.6		Металлический шкаф. Верхняя секция - дверки из HPL-пластика со стеклянной вставкой (запираются на замок), оснащена тремя съемными, регулируемыми полками из стекла; нижняя секция - дверки из HPL-пластика (запираются на замок), оснащена съемной, регулируемой полкой из металла. Установлен на регулируемые опоры.

3. Комплект поставки

Пакет №1:

шкаф - 1 шт.
ключ замка - 4 шт. (для ШК-2.1, ШК-2.2, ШК-2.4, ШК-2.6)
- 2 шт. (для ШК-2.3, ШК-2.5)
полка металл - 4 шт. (для ШК-2.1, ШК-2.4)
- 1 шт. (для ШК-2.2, ШК-2.3, ШК-2.5)
полка пластик - 3 шт. (для ШК-2.2)
полкодержатели - 16 шт.
полка стекло - 3 шт. (Для ШК-2.3, ШК-2.5, ШК-2.6)
ручка для стеклянной двери – 2 шт. (Для ШК-2.3, ШК-2.5, ШК-2.6)
петля для стеклянной двери левая – 2 шт. (Для ШК-2.3, ШК-2.5, ШК-2.6)
петля для стеклянной двери правая – 2 шт. (Для ШК-2.3, ШК-2.5, ШК-2.6)
дверка стекло – 2 шт. (Для ШК-2.3, ШК-2.5, ШК-2.6)
руководство по эксплуатации-1 шт.

4. Инструкция по сборке

- ✓ Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
- ✓ Отрегулировать положение ножек.
- Для исполнений ШК-2.3, ШК-2.5**
- ✓ Установить петли стеклянных дверок в пластмассовые втулки. При этом крепежные винты должны быть внутри шкафа.
- ✓ В петли вложить пластмассовые вкладыши.

- ✓ Вставить стеклянную дверку в петлю между пластиковыми вкладышами. Передвигая стекло в петлях, отрегулировать зазор между стеклянной дверкой и каркасом шкафа. Затянуть крепежные винты до надежной фиксации стекла в петлях.
- ✓ Вложить широкий пластиковый вкладыш в ручку. Вставить ручку в нижнюю кромку стеклянной дверки напротив магнитного держателя.
- ✓ Установить полкодержатели на удобном уровне.
- ✓ Уложить на полкодержатели полки.
- ✓ Шкаф готов к эксплуатации.

Приложение 21
к руководству по эксплуатации ШДЛ1.152016.001 РЭ

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-20 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 800±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-20		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция - дверки стекло, оснащена двумя съемными полками ЛДСП, нижняя секция - с дверками, оснащена съемной полкой ЛДСП. Нижние дверки закрываются на замок.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
1.	Пакет №1: Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель средняя		1 шт.
4.	Панель полки съемной		3 шт.
5.	Панель дверки ЛДСП		2 шт.
6.	Опора регулируемая		4 шт.
7.	Шуруп 4x20		16 шт.
8.	Шток эксцентрика		10 шт.
9.	Эксцентрик		10 шт.
10.	Заглушка эксцентрика		10 шт.
11.	Винт полкодержателя		12 шт.


№	Наименование	Изображение	Количество
12.	Полкодержатель		12 шт.
13.	Шток эксцентрика усиленного		4 шт.
14.	Эксцентрик усиленный		4 шт.
15.	Ключ шестигранный		1 шт.
16.	Петля для ст. дверки		4 шт.
17.	Петля 4-х шарнирная		4 шт.
18.	Шуруп 4x16		8 шт.
19.	Евровинт 6,3x13		16 шт.
20.	Ручка-скоба		4 шт.
21.	Втулка		4 шт.
22.	Винт М4х12		4 шт.
23.	Шайба 4		8 шт.
24.	Замок		1 шт.
25.	Ключ от замка		2 шт.
26.	Шуруп 3x16		4 шт.
27.	Полкодержатель		4 шт.
28.	Шуруп 3,5x16		2 шт.
29.	Руководство по эксплуатации		1 шт.
30.	Пакет №2: Панель задняя		1 шт.
31.	Пакет №3: панель дверки стекло		2 шт.

1. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (6) при помощи шурупов (7). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (8) до упора.
3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**
4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (9). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (15) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (10).
5. Установить заднюю стенку (29) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.
6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас модуля сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**
7. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (11) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (12) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.
8. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (13). Вставить эксцентрик усиленный (15) в подготовленные отверстия средней панели (3) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.
9. Прикрепить шарнирные петли (16) для стеклянных дверок (30) согласно схеме сборки петли (см. схему). Для этого необходимо вставить чашку петли в подготовленное отверстие стеклянной дверки с внутренней стороны, с лицевой стороны зафиксировать петлю при помощи вкладки и установочных винтов. Закрепить вкладку декоративной крышечкой.
10. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (19), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.
11. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (17) на панель дверки (5), двумя шурупами (18) каждую.
12. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (19), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.




13. Отрегулировать положение панелей дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).
14. Установить ручку (22) на панель дверки (7) при помощи втулки (23) и винта М4х12 (24).
15. Установить ручку (20) на панель дверки (5) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (23).
16. Установить в подготовленное отверстие замок мебельный (24). Закрепить его шурупами (18). К средней панели (3) и к левой дверки прикрепить ответные планки замка при помощи шурупов (26).
17. Установить в подготовленные отверстия панелей горизонтальных (2) полкодержатели (27).
18. Шкаф готов к эксплуатации.

Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

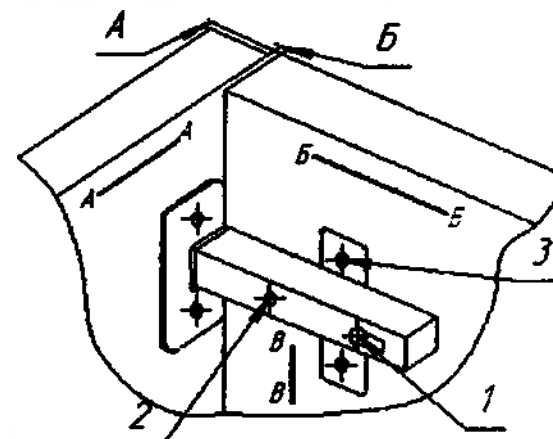

Регулирование петли осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями - 3 мм.
Во избежание поломки петлю открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

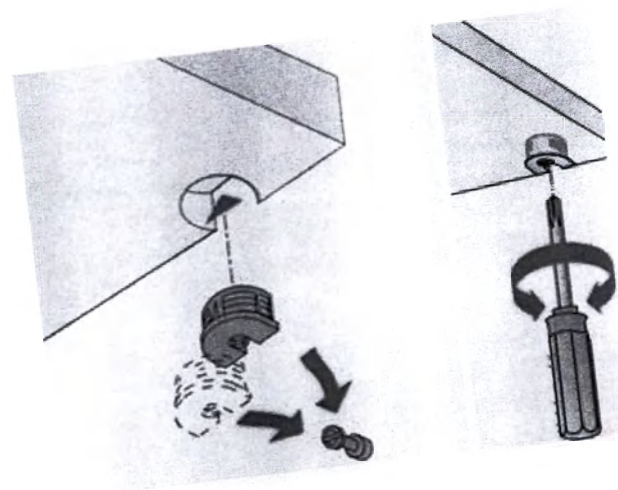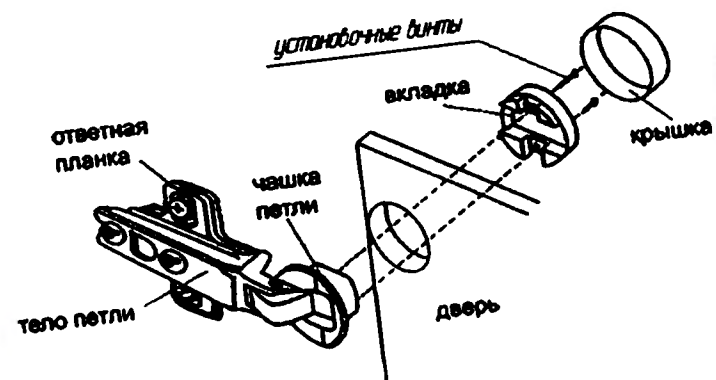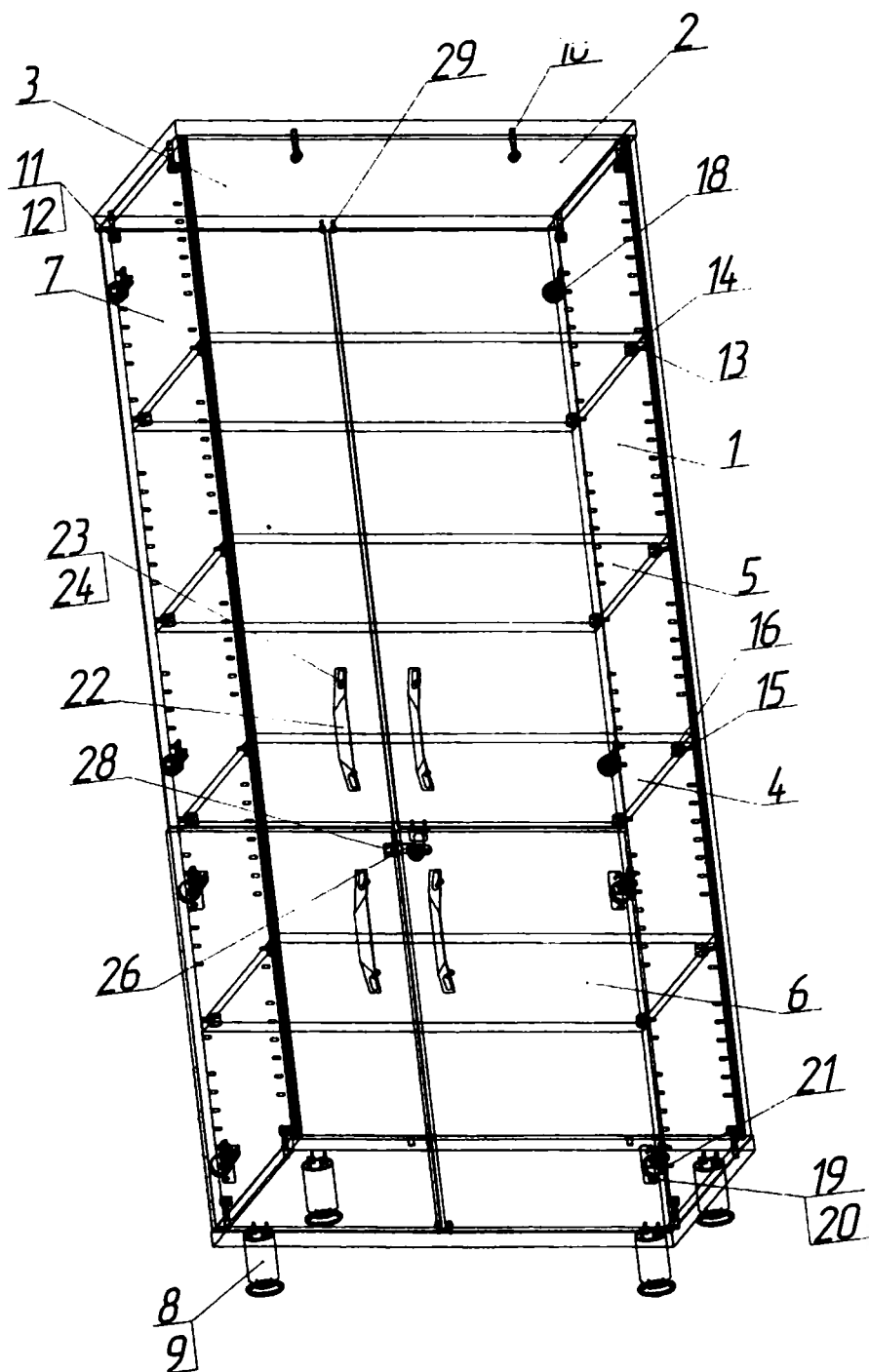

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-21 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 800±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-21		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция – с дверками, оснащена двумя съемными полками ЛДСП, нижняя секция – с дверками, оснащена съемной полкой ЛДСП. Все дверки закрываются на замки.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
1.	Пакет №1: Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель средняя		1 шт.
4.	Панель полки съемной		3 шт.
5.	Панель дверки		4 шт.
6.	Опора регулируемая		4 шт.
7.	Шуруп 4x20		16 шт.
8.	Шток эксцентрика		10 шт.
9.	Эксцентрик		10 шт.
10.	Заглушка эксцентрика		10 шт.
11.	Винт полкодержателя		12 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
12.	Полкодержатель		12 шт.
13.	Шток эксцентрика усиленного		4 шт.
14.	Эксцентрик усиленный		4 шт.
15.	Ключ шестигранный		1 шт.
16.	Петля 4-х шарнирная		8 шт.
17.	Шуруп 4x16		20 шт.
18.	Евровинт 6,3x13		16 шт.
19.	Ручка-скоба		4 шт.
20.	Шайба 4		8 шт.
21.	Замок		2 шт.
22.	Ключ от замка		4 шт.
23.	Шуруп 3x16		8 шт.
24.	Полкодержатель для стек полок		4 шт.
25.	Шуруп 3,5x16		4 шт.
26.	Руководство по эксплуатации		1 шт.
27.	Пакет №2: Панель задней стенки		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (6) при помощи шурупов (7). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (8) до упора.
3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в

заглушками (11).

ключа (16) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрывать эксцентрики 5. Установить заднюю стенку (25) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас модуля сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (11) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (12) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинного молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.

8. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (13). Вставить эксцентрик усиленный (14) в подготовленные отверстия средней панели (3) при помощи резинного молотка. Закрепить панель.

9. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (16) на панель дверки (5), двумя шурупами (17) каждую.

10. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (18), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

11. Отрегулировать положение панелей дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).

12. Установить ручку (19) на панель дверки (5) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (20).

13. Установить в подготовленное отверстие замок мебельный (21).


Закрепить его шурупами (7). К средней панели (3) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (23).

14. Шкаф готов к эксплуатации.

подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**




4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (9). С помощью крестовой отвертки или шестигранного

Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

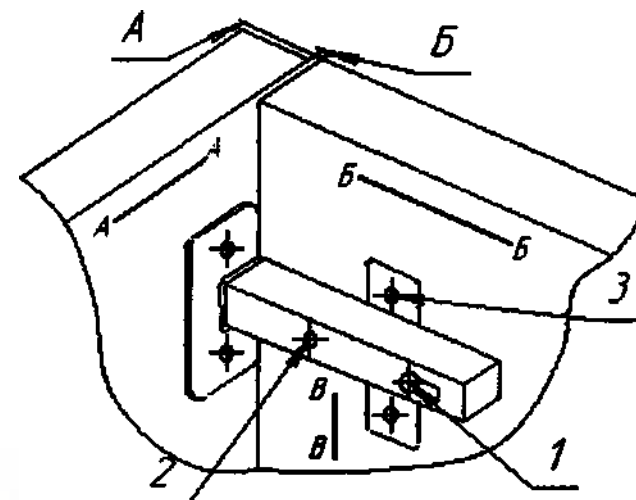

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и В-В и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам В-В, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями – 3 мм. Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

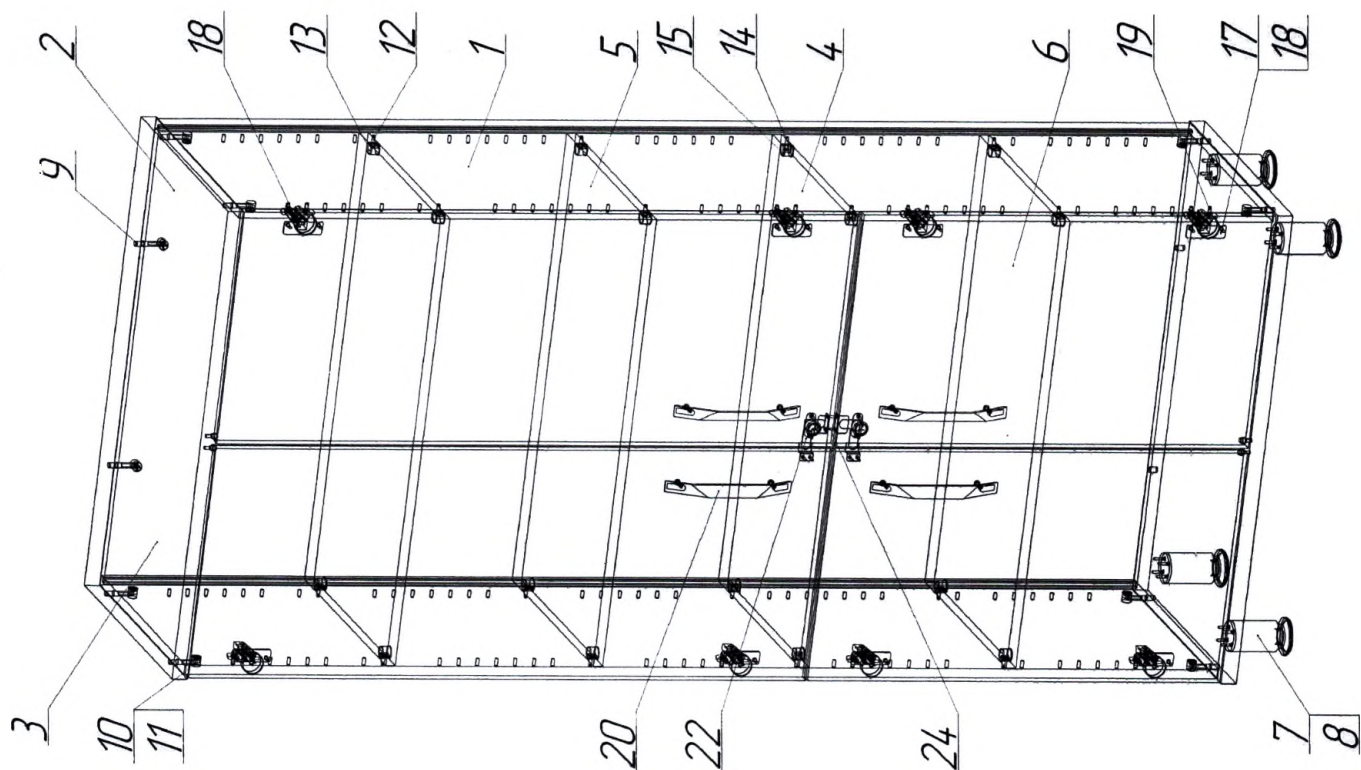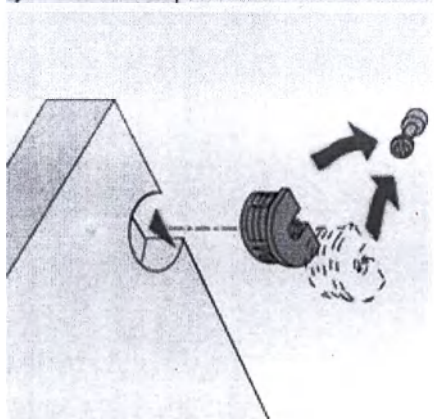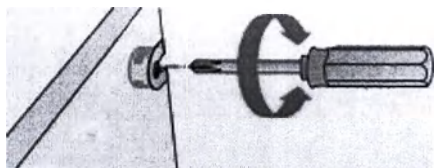

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-22 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 800±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-22		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция - дверки стекло, оснащена двумя съемными полками ЛДСП, нижняя секция - с дверкой, четыре выдвижных ящика, съемная полка ЛДСП. Нижняя дверка и верхний ящик закрываются на замки.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
Пакет №1:			
1.	Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель перегородки		2 шт.
4.	Панель полки съемной		3 шт.
5.	Панель дверки		1 шт.
6.	Панель средняя		1 шт.
7.	Панель ящика нижняя		4 шт.
8.	Панель ящика задняя		3 шт.
9.	Панель ящика задняя большая		1 шт.
10.	Панель ящика фасадная		3 шт.
11.	Панель ящика фасадная большая		1 шт.
Пакет №2:			
12.	Панель задней стенки		1 шт.
Пакет №3:			
13.	Панель дверки стекло		2 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
Пакет №4:			
14.	Комплект ящика Unni		4 шт.
15.	Рейлинг продольный Unni		1 шт.
16.	Опора регулируемая		4 шт.
17.	Шуруп 4x20		24 шт.
18.	Шток эксцентрика		10 шт.
19.	Эксцентрик		10 шт.
20.	Заглушка эксцентрика		10 шт.
21.	Шуруп 3,5x16		52 шт.
22.	Ключ шестигранный		1 шт.
23.	Евровинт 7x50		8 шт.
24.	Шуруп 4,2x13		40 шт.
25.	Ручка-скоба		7 шт.
26.	Шайба 4		10 шт.
27.	Шток эксцентрика усиленного		8 шт.
28.	Эксцентрик усиленный		8 шт.
29.	Стяжка		2 шт.
30.	Винт полкодержателя		12 шт.
31.	Полкодержатель		12 шт.

32.	Петля 4-х шарнирная		2 шт.
33.	Шуруп 4x16		4 шт.
34.	Евровинт 6,3x13		12 шт.
35.	Петля для ст. дверки		4 шт.
36.	Втулка		4 шт.
37.	Винт М4х12		4 шт.
38.	Полкодержатель		12 шт.
39.	Замок		2 шт.
40.	Ключ замка		4 шт.
41.	Шуруп 3x16		4 шт.
42.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.

2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (16) при помощи шурупов (17). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (18) до упора.

3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**

4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (19). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (22) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрыть эксцентрики заглушками (20).

5. Установить заднюю стенку (12) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас

18. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке

шкафа сверху, чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на лицевых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. Закрутить в подготовленные отверстия панели горизонтальной нижней (2) и панели средней (6) штоки эксцентриков усиленных (27). Вставить эксцентрик усиленный (28) в подготовленные отверстия полки при помощи резинового молотка.

Стянуть друг с другом панели перегородок (3) при помощи стяжки межсекционной (29) так, как показано на схеме сборки, учитывая размеры указанные на схеме установки перегородок (**эксцентрик усиленный должен оказаться в правой секции**).

8. При помощи саморезов (21) прикрепить направляющие Unnihopper (14) к боковым панелям и панелям перегородок изделия в подготовленные наметки крепления.

9. При помощи саморезов (24) прикрепить боковые стенки Unni (14) к панели ящика нижней (7) так, чтобы со стороны, где к направляющим устанавливается панель фасадная ящика панель ящика нижняя была на одном уровне с боковыми стенками Unni (14).

10. Вставить держатели задней стенки направляющих Unni (14) в боковые стенки Unni (14). При помощи саморезов (21) прикрепить панель ящика заднюю (8,9) к держателям задней стенки направляющих Unni (14). Затем закрутить евровинты (23) в подготовленные отверстия панели ящика нижней (7).

11. При помощи шурупов (21) прикрепить к панели фасадной ящика (10,11) держатели, для этого необходимо использовать наметки на панели.

12. Отрегулировать ящики согласно схеме регулировки.

13. В подготовленные отверстия установить ручку (25) на панель ящика фасадную (10,11) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (26).

14. При помощи подготовленных отверстий в панели фасадной нижнего ящика (11), установить рейлинг продольный Unni (15) и закрепить его к панели ящика задней (9) при помощи шурупов (21).

15. Прикрепить шарнирные петли (35) для стеклянных дверок (13) согласно схеме сборки петли (см. схему). Для этого необходимо вставить чашку петли в подготовленное отверстие стеклянной дверки с внутренней стороны, с лицевой стороны зафиксировать петлю при помощи вкладки и установочных винтов. Закрыть вкладку декоративной крышечкой.

16. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (34), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

17. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (32) на панель дверки (5), двумя шурупами (33) каждую.

двумя винтами (34), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

19. Отрегулировать положение панели дверки и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).

20. Установить ручку (25) на панель дверки (5) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (26).

21. Установить ручку (25) на панель дверки (13) при помощи втулки (36) и винта М4х12 (37).

22. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штики эксцентрики усиленных (27). Вставить эксцентрик усиленный (28) в подготовленные отверстия средней панели (6) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.


23. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (30) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (31) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.

20. Установить в подготовленное отверстие верхнего ящика и дверки (5) замок мебельный (39). Закрепить его шурупами (17). К верхней панели (2) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (41).

21. Установить в подготовленные отверстия панелей горизонтальных (2) полкодержателя (38).



22. Шкаф готов к эксплуатации.

Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

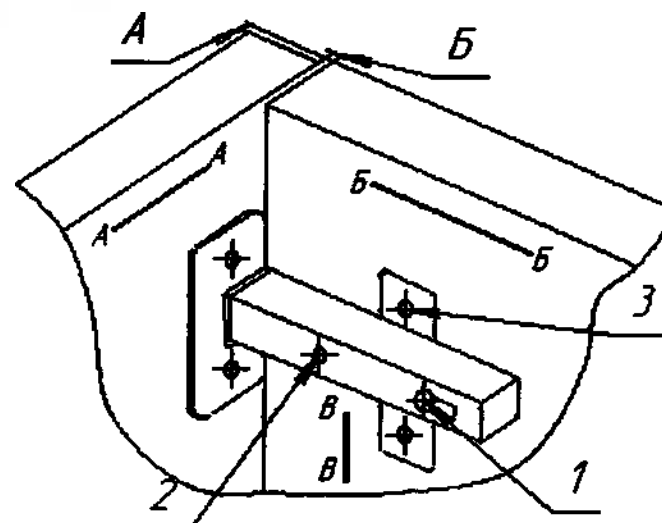

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями - 3 мм.
Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

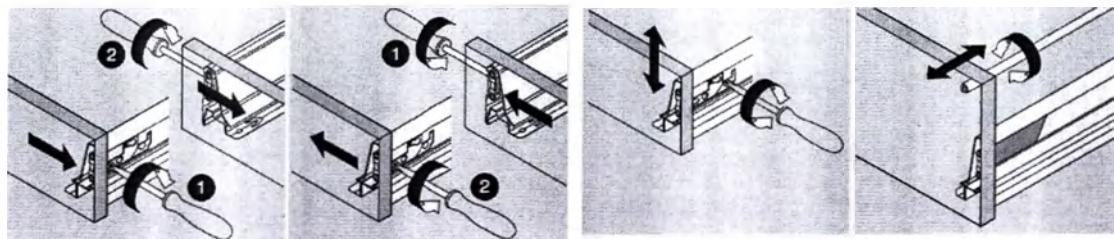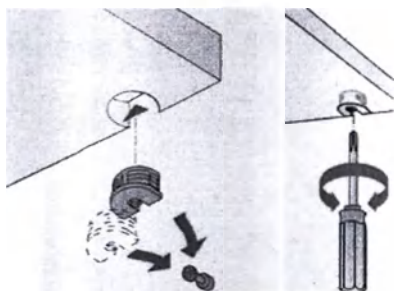

Регулировка по ширине: вправо

Регулировка по ширине: влево

Регулировка по высоте: ± 2 мм

Регулировка наклона




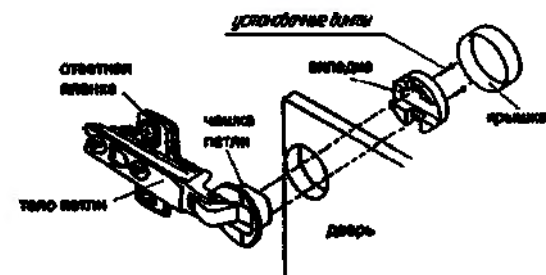


Схема установки замка мебельного/при наличии

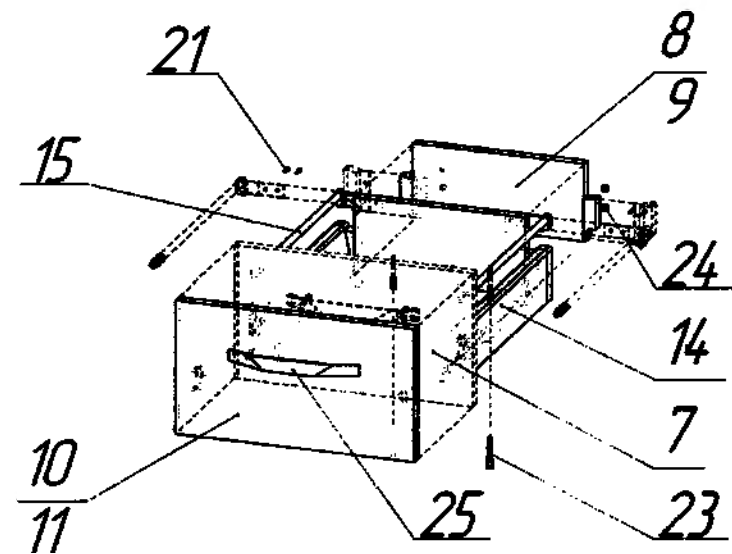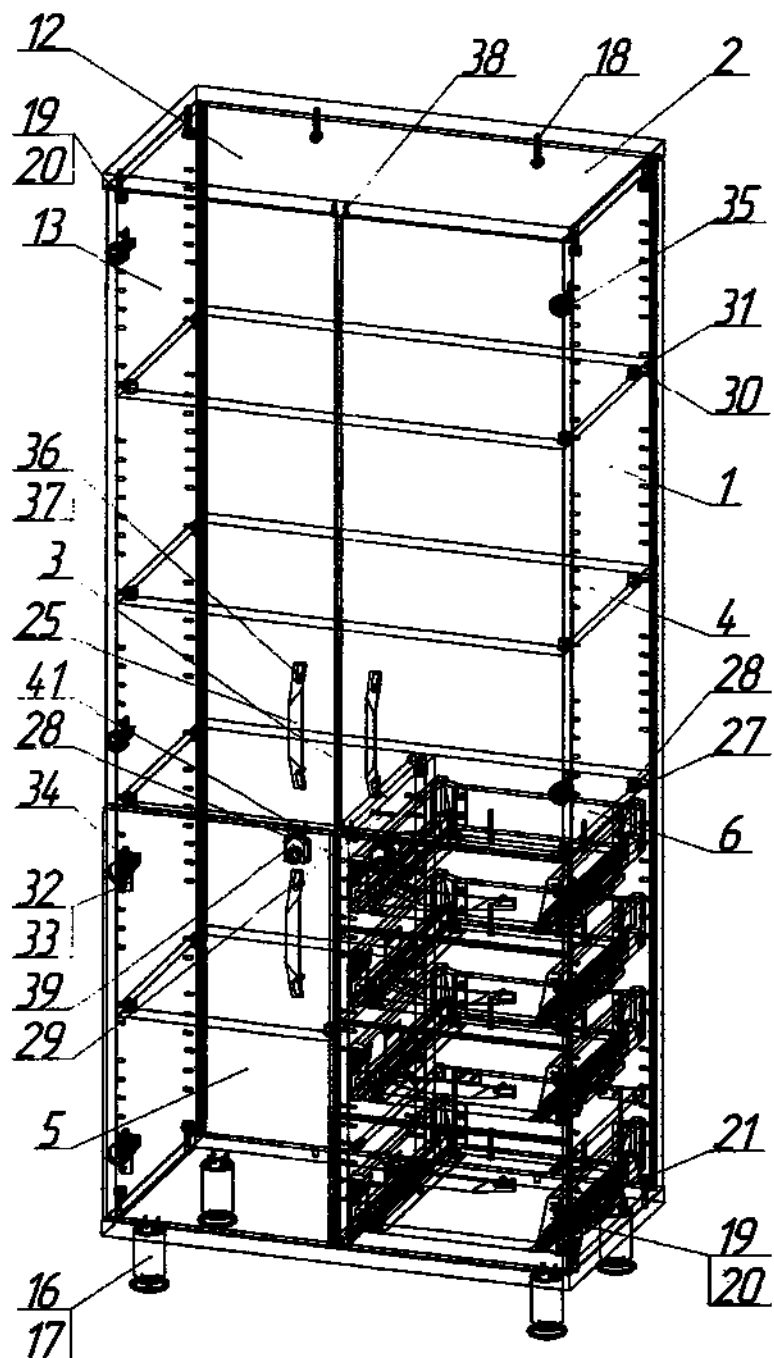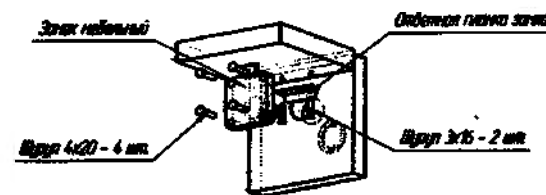

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-23 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 800±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-23		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция - дверки стекло, оснащена съемной полкой ЛДСП, нижняя секция - с дверками, оснащена съемной полкой ЛДСП. Средняя секция - открытая ниша. Нижние дверки закрываются на замок.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
1.	Пакет №1: Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель средняя		2 шт.
4.	Панель полки съемной		2 шт.
5.	Панель дверки ЛДСП		2 шт.
6.	Опора регулируемая		4 шт.
7.	Шуруп 4x20		16 шт.
8.	Шток эксцентрика		10 шт.
9.	Эксцентрик		10 шт.
10.	Заглушка эксцентрика		10 шт.
11.	Винт полкодержателя		8 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
12.	Полкодержатель		8 шт.
13.	Шток эксцентрика усиленного		8 шт.
14.	Эксцентрик усиленный		8 шт.
15.	Ключ шестигранный		1 шт.
16.	Петля для ст. дверки		4 шт.
17.	Петля 4-х шарнирная		4 шт.
18.	Шуруп 4x16		10 шт.
19.	Евровинт 6,3x13		16 шт.
20.	Ручка-скоба		4 шт.
21.	Втулка		4 шт.
22.	Винт М4х12		4 шт.
23.	Шайба 4		4 шт.
24.	Замок		1 шт.
25.	Ключ от замка		2 шт.
26.	Шуруп 3x16		4 шт.
27.	Полкодержатель		4 шт.
28.	Шуруп 3,5x16		2 шт.
29.	Руководство по эксплуатации		1 шт.
30.	Пакет №2: Панель задней стенки		1 шт.
31.	Пакет №3: Панель дверки		2 шт.

1. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (6) при помощи шурупов (7). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (8) до упора.
3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**
4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (9). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (15) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (10).
5. Установить заднюю стенку (29) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.
6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас шкафа сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**
7. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (11) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (12) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.
8. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (13). Вставить эксцентрик усиленный (14) в подготовленные отверстия средней панели (4) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.
9. Прикрепить шарнирные петли (16) для стеклянных дверок (30) согласно схеме сборки петли (см. схему). Для этого необходимо вставить чашку петли в подготовленное отверстие стеклянной дверки с внутренней стороны, с лицевой стороны зафиксировать петлю при помощи вкладки и установочных винтов. Закрепить вкладку декоративной крышечкой.
10. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (19), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.
11. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (17) на панель дверки (5), двумя шурупами (18) каждую.
12. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (19), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с

стекло

подготовленными отверстиями в боковой стенке.

13. Отрегулировать положение панелей дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).

14. Установить ручку (20) на панель дверки (5) при помощи втулки (21) и винта М4х12 (22).


15. Установить ручку (20) на панель дверки (5) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (23).

16. Установить в подготовленное отверстие замок мебельный (24). Закрепить его шурупами (18). К средней панели (3) и к левой дверки прикрепить ответные планки замка при помощи шурупов (26).

17. Установить в подготовленные отверстия панелей горизонтальных (2) полкодержатели (27).





18. Шкаф готов к эксплуатации.

Порядок регулировки 4-х шарнирной петли

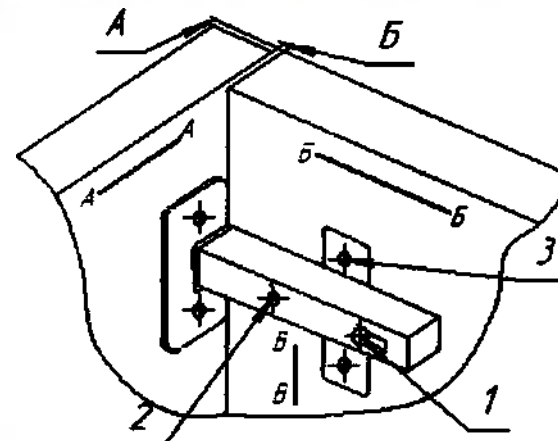

Регулировка петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями - 3 мм. Во избежание поломки петлей открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

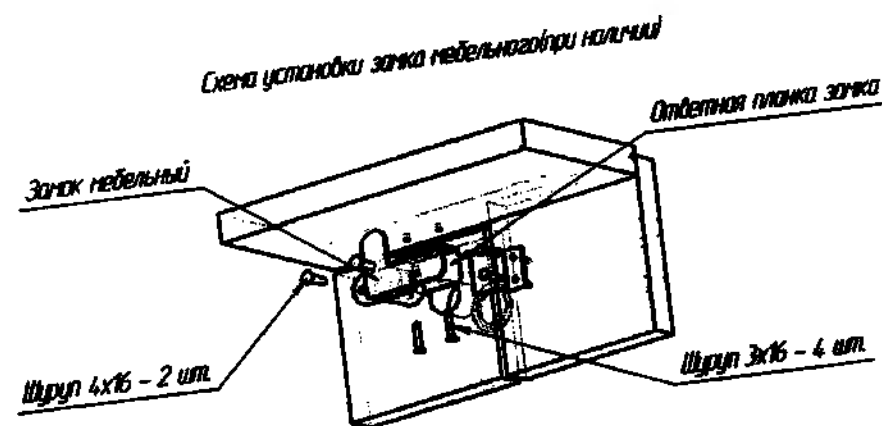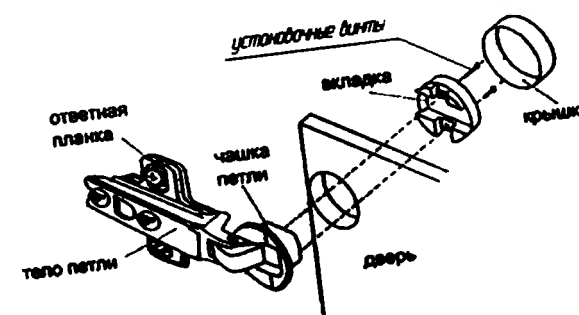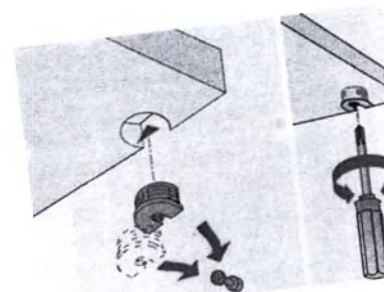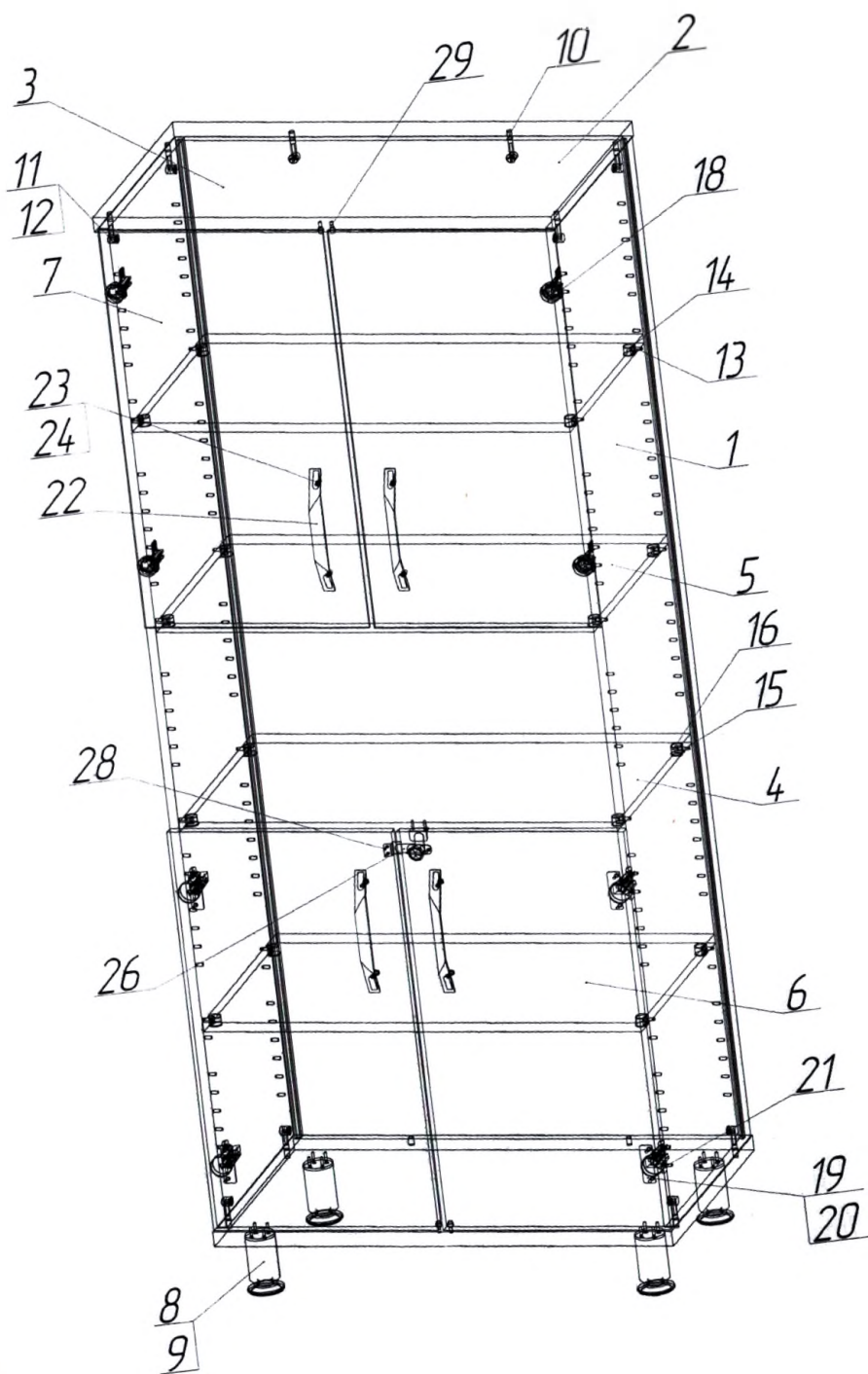

1. Установить в подготовленное отверстие замок мебельный;
2. Закрепить шурупами 4x16 - 2 шт.;
3. К верхней панели прикрепить ответные планки замка при помощи шурупов 3x16 - 4 шт.


1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-24 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 800±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

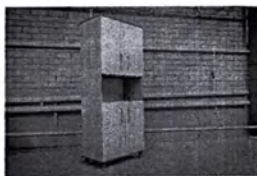Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-24		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция – с дверками, оснащена съемной полкой ЛДСП, нижняя – с дверками, оснащена съемной полкой ЛДСП. Средняя секция - открытая ниша. Верхние и нижние дверки закрываются на замки.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
1.	Пакет №1: Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель средняя		1 шт.
4.	Панель полки съемной		3 шт.
5.	Панель дверки		4 шт.
6.	Опора регулируемая		4 шт.
7.	Шуруп 4x20		16 шт.
8.	Шток эксцентрика		10 шт.
9.	Эксцентрик		10 шт.
10.	Заглушка эксцентрика		10 шт.
11.	Винт полкодержателя		8 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
12.	Полкодержатель		8 шт.
13.	Шток эксцентрика усиленного		8 шт.
14.	Эксцентрик усиленный		8 шт.
15.	Ключ шестигранный		1 шт.
16.	Петля 4-х шарнирная		8 шт.
17.	Шуруп 4x16		20 шт.
18.	Евровинт 6,3x13		16 шт.
19.	Ручка-скоба		4 шт.
20.	Шайба 4		8 шт.
21.	Замок		2 шт.
22.	Ключ от замка		4 шт.
23.	Шуруп 3x16		8 шт.
24.	Полкодержатель для стеклянных полок		4 шт.
25.	Шуруп 3,5x16		2 шт.
26.	Руководство по эксплуатации		1 шт.
27.	Пакет №2: Панель задней стенки		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (6) при помощи шурупов (7). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (9) до упора.
3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в

ключа (16) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (11).

5. Установить заднюю стенку (25) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас шкафа сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (11) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (12) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.

8. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (13). Вставить эксцентрик усиленный (14) в подготовленные отверстия средней панели (3) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.

9. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (16) на панель дверки (5), двумя шурупами (17) каждую.

10. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (18), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

11. Отрегулировать положение панелей дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).

12. Установить ручку (19) на панель дверки (5) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (20).


13. Установить в подготовленное отверстие замок мебельный (21). Закрепить его шурупами (7). К средней панели (3) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (23).

14. Шкаф готов к эксплуатации.

подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**


4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (9). С помощью крестовой отвертки или шестигранного



Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

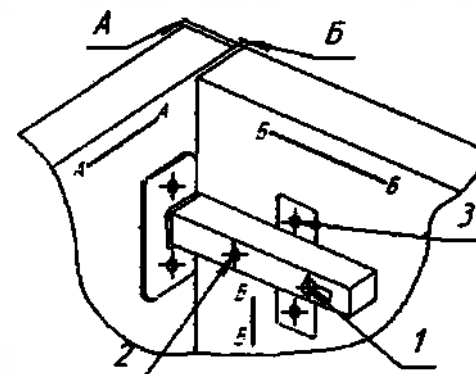

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверками - 3 мм. Во избежание поломки петли открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

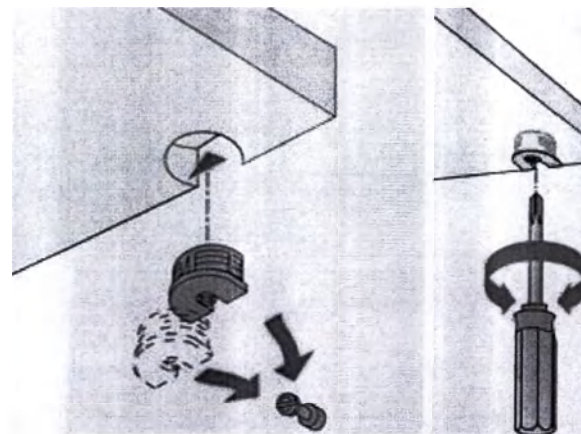

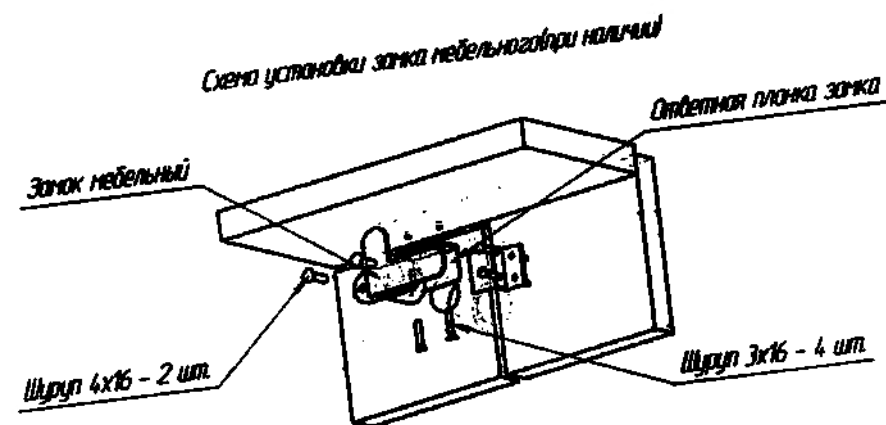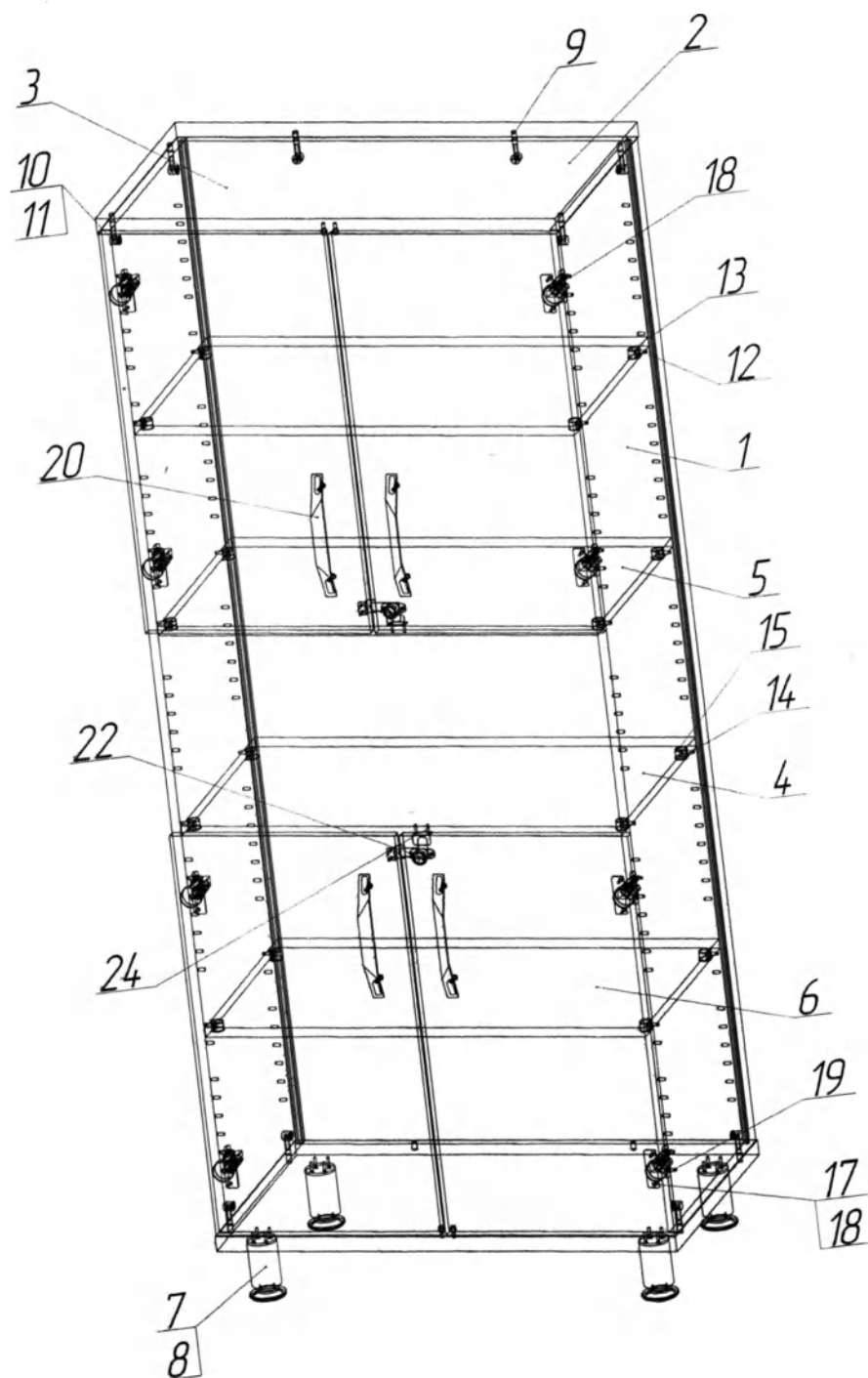

1. Установить в подготовленное отверстие замок мебельный;
2. Закрепить шурупами 4x16 - 2 шт.;
3. К верхней панели прикрепить ответные планки замка при помощи шурупов 3x16 - 4 шт.

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-25 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 800±5 мм, глубина 457±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-25		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция – стекло, оснащена съемной полкой ЛДСП, нижняя – дверки стекло, оснащена съемной полкой ЛДСП. Средняя секция - открытая ниша.


3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
1.	Пакет №1: Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель средняя		2 шт.
4.	Панель полки съемной		2 шт.
6.	Опора регулируемая		4 шт.
7.	Шуруп 4x20		16 шт.
8.	Шток эксцентрика		10 шт.
9.	Эксцентрик		10 шт.
10.	Заглушка эксцентрика		10 шт.
11.	Винт полкодержателя		8 шт.
12.	Полкодержатель		8 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
13.	Шток эксцентрика усиленного		8 шт.
14.	Эксцентрик усиленный		8 шт.
15.	Ключ шестигранный		1 шт.
16.	Петля для ст. дверки		8 шт.
17.	Евровинт 6,3x13		16 шт.
18.	Ручка-скоба		4 шт.
19.	Втулка ручки для ст. дверки		8 шт.
20.	Винт М4х12		8 шт.
21.	Полкодержатель для ст. полок		4 шт.
22.	Руководство по эксплуатации		1 шт.
23.	Пакет №2: Панель задней стенки		1 шт.
24.	Пакет №3: Панель дверки стекло		4 шт.

4. Инструкция по сборке




1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (6) при помощи шурупов (7). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (8) до упора.
3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**
4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (9). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (15) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрыть эксцентрики заглушками (11).

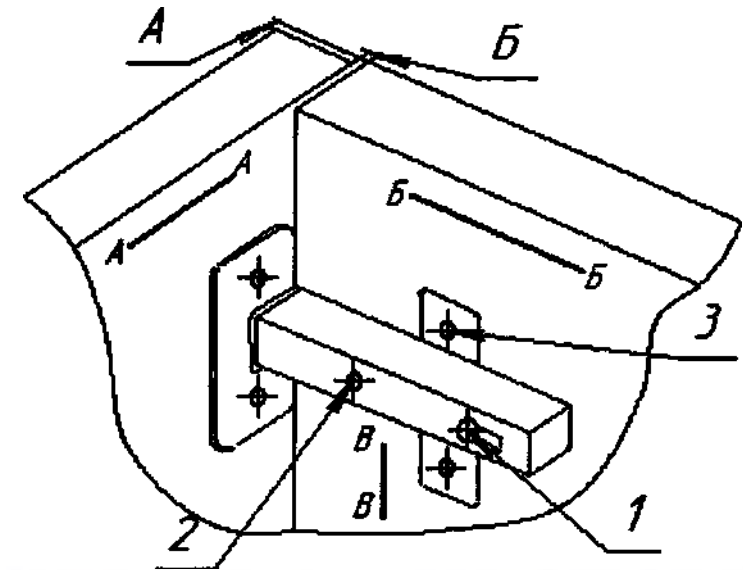

5. Установить заднюю стенку (24) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.
6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас шкафа сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**
7. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (11) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (12) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.
8. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (13). Вставить эксцентрик усиленный (14) в подготовленные отверстия средней панели (3) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.
9. Прикрепить шарнирные петли (16) для стеклянных дверок (23) согласно схеме сборки петли (см. схему). Для этого необходимо вставить чашку петли в подготовленное отверстие стеклянной дверки с внутренней стороны, с лицевой стороны зафиксировать петлю при помощи вкладки и установочных винтов. Закрепить вкладку декоративной крышечкой.
10. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (17), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.
11. Отрегулировать положение панелей дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).
12. Установить ручку (18) на панель дверки (5) при помощи втулки (19) и винта М4х12 (20).
13. Шкаф готов к эксплуатации.

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли заворачиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями - 3 мм.
Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

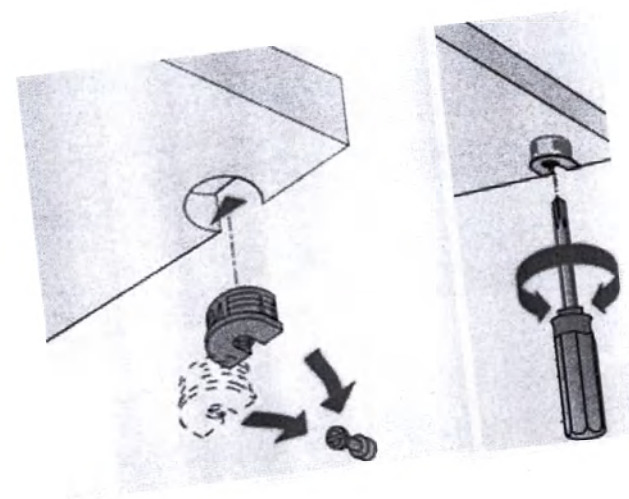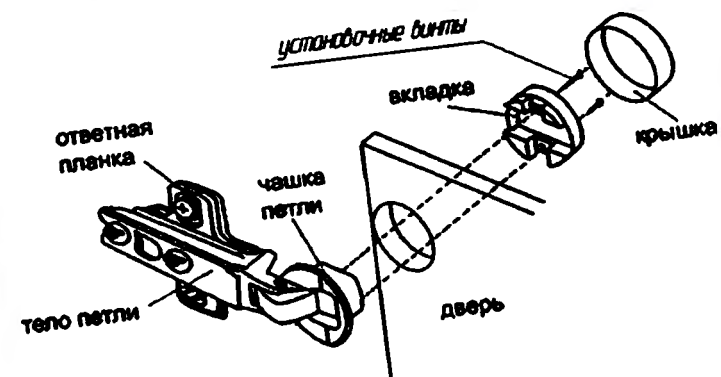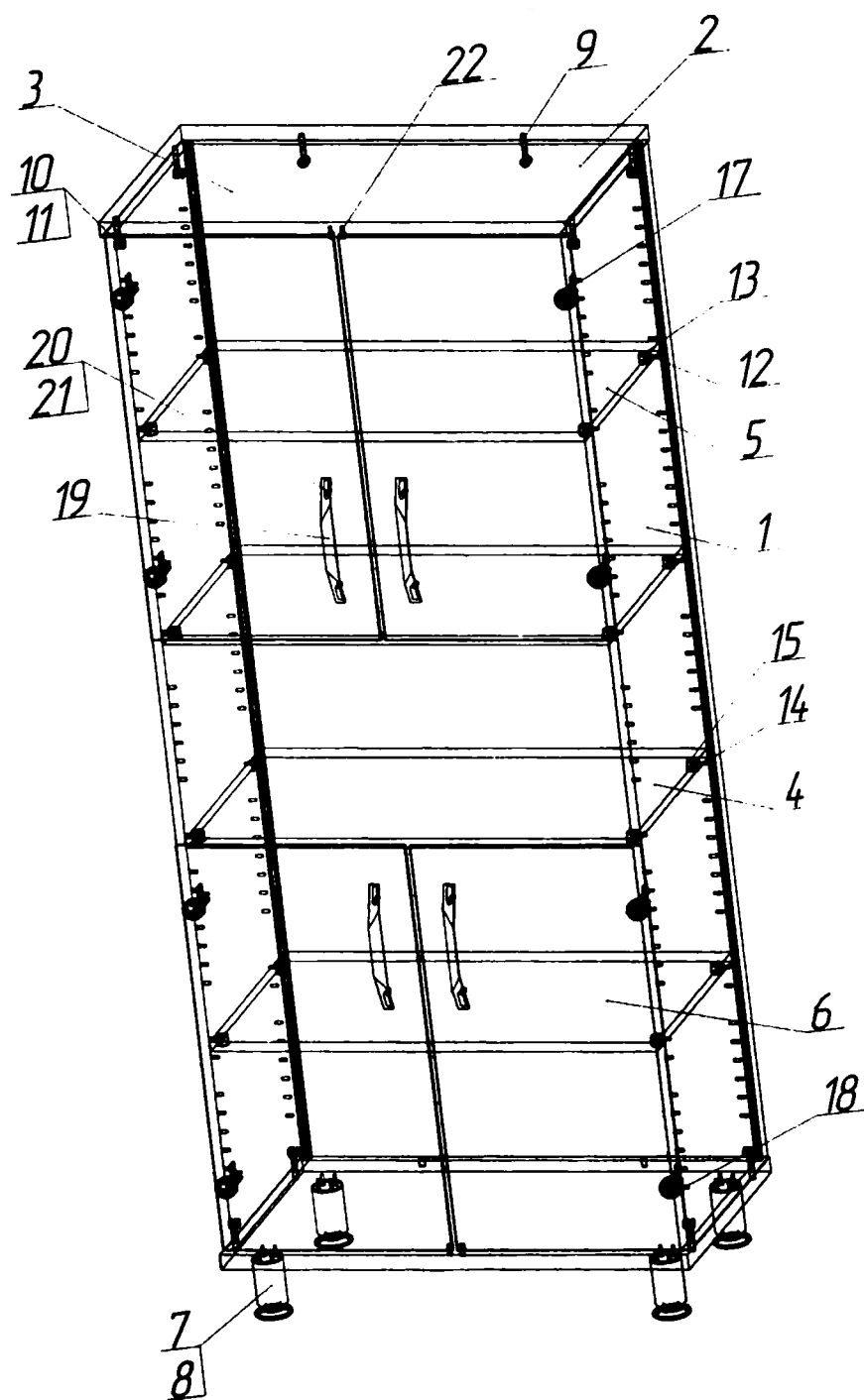

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-26 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание


Габаритные размеры:

Ширина 800±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-26		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция – дверки стекло, оснащена съемной полкой ЛДСП, нижняя – с дверкой, четыре выдвижных ящика, съемная полка ЛДСП. Средняя секция - открытая ниша. Нижняя дверка и верхний ящик закрываются на замки.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
	Пакет №1:		
1.	Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель перегородки		2 шт.
4.	Панель полки съемной		2 шт.
5.	Панель дверки		1 шт.
6.	Панель средняя		2 шт.
7.	Панель ящика нижняя		4 шт.
8.	Панель ящика задняя		3 шт.
9.	Панель ящика задняя большая		1 шт.
10.	Панель ящика фасадная		3 шт.
11.	Панель ящика фасадная большая		1 шт.
	Пакет №2:		
12.	Панель задней стенки		1 шт.
	Пакет №3:		
13.	Панель дверки стекло		2 шт.

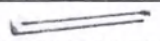№	Наименование	Изображение	Количество
	Пакет №4:		
14.	Комплект ящика Unni		4 шт.
15.	Рейлинг продольный Unni		1 шт.
16.	Опора регулируемая		4 шт.
17.	Шуруп 4x20		24 шт.
18.	Шток эксцентрика		10 шт.
19.	Эксцентрик		10 шт.
20.	Заглушка эксцентрика		10 шт.
21.	Шуруп 3,5x16		52 шт.
22.	Ключ шестигранный		1 шт.
23.	Евровинт 7x50		8 шт.
24.	Шуруп 4,2x13		40 шт.
25.	Ручка-скоба		7 шт.
26.	Шайба 4		10 шт.
27.	Шток эксцентрика усиленного		12 шт.
28.	Эксцентрик усиленный		12 шт.
29.	Стяжка		2 шт.
30.	Винт полкодержателя		8 шт.
31.	Полкодержатель		8 шт.

32.	Петля 4-х шарнирная		2 шт.
33.	Шуруп 4x16		4 шт.
34.	Евровинт 6,3x13		12 шт.
35.	Петля для ст. дверки		4 шт.
36.	Втулка		4 шт.
37.	Винт М4х12		4 шт.
38.	Полкодержатель для ст. полок		2 шт.
39.	Замок		2 шт.
40.	Ключ от замка		4 шт.
41.	Шуруп 3x16		4 шт.
42.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.

2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (16) при помощи шурупов (17). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (18) до упора.

3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**

4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (19). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (22) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (20).

5. Установить заднюю стенку (12) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

шкафа сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. Закрутить в подготовленные отверстия панели горизонтальной нижней (2) и панели средней (6) штоки эксцентриков усиленных (27). Вставить эксцентрик усиленный (28) в подготовленные отверстия полки при помощи резинового молотка.

Стянуть друг с другом панели перегородок (3) при помощи стяжки межсекционной (29) так, как показано на схеме сборки, учитывая размеры указанные на схеме установки перегородок (**эксцентрик усиленный должен оказаться в правой секции**).

8. При помощи саморезов (21) прикрепить направляющие Unni (14) к боковым панелям и панелям перегородок изделия в подготовленные наметки крепления.

9. При помощи саморезов (24) прикрепить боковые стенки Unni (14) к панели ящика нижней (7) так, чтобы со стороны, где к направляющим устанавливается панель фасадная ящика панель ящика нижняя была на одном уровне с боковыми стенками Unni (14).

10. Вставить держатели задней стенки направляющих Unni (14) в боковые стенки Unni (14). При помощи саморезов (21) прикрепить панель ящика заднюю (8,9) к держателям задней стенки направляющих Unni (14). Затем закрутить евровинты (23) в подготовленные отверстия панели ящика нижней (7).

11. При помощи шурупов (21) прикрепить к панели фасадной ящика (10,11) держатели, для этого необходимо использовать наметки на панели.

12. Отрегулировать ящики согласно схеме регулировки.

13. В подготовленные отверстия установить ручку (25) на панель ящика фасадную (10,11) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (26).

14. При помощи подготовленных отверстий в панели фасадной нижнего ящика (11), установить рейлинг продольный Unni (15) и закрепить его к панели ящика задней (9) при помощи шурупов (21).

15. Прикрепить шарнирные петли (35) для стеклянных дверок (13) согласно схеме сборки петли (**см. схему**). Для этого необходимо вставить чашку петли в подготовленное отверстие стеклянной дверки с внутренней стороны, с лицевой стороны зафиксировать петлю при помощи вкладки и установочных винтов. Закрепить вкладку декоративной крышечкой.

16. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (34), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

17. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (32) на панель дверки (5), двумя шурупами (33) каждую.

18. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (34), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

19. Отрегулировать положение панели дверки и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).

20. Установить ручку (25) на панель дверки (5) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (26).

21. Установить ручку (25) на панель дверки (13) при помощи втулки (36) и винта M4x12 (37).

22. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (27). Вставить эксцентрик усиленный (28) в подготовленные отверстия средней панели (6) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.


23. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (30) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (31) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.

20. Установить в подготовленное отверстие верхнего ящика и дверки (5) замок мебельный (39). Закрепить его шурупами (17). К верхней панели (2) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (41).

21. Установить в подготовленные отверстия панелей горизонтальных (2) полкодержателя (38).



22. Шкаф готов к эксплуатации.

Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

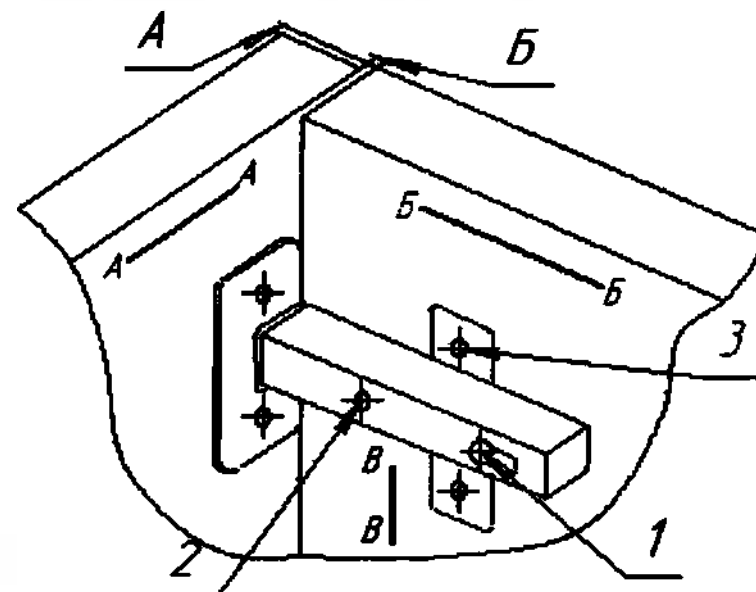

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями - 3 мм. Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

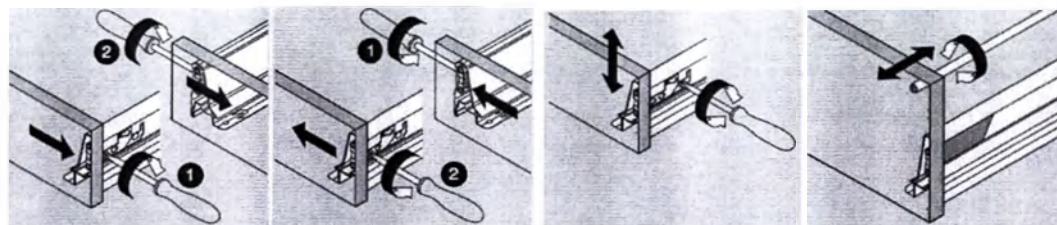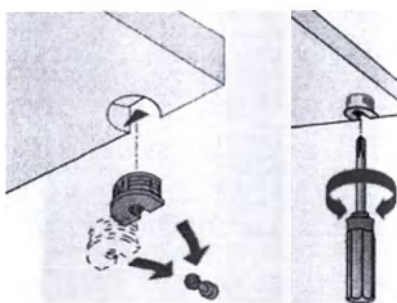

Регулировка по ширине: вправо

Регулировка по ширине: влево

Регулировка по высоте: ± 2 мм

Регулировка наклона




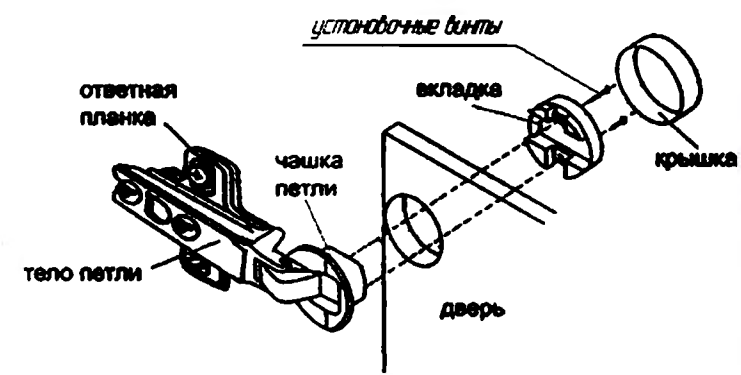


Схема установки замка медельнаго(при наличии)

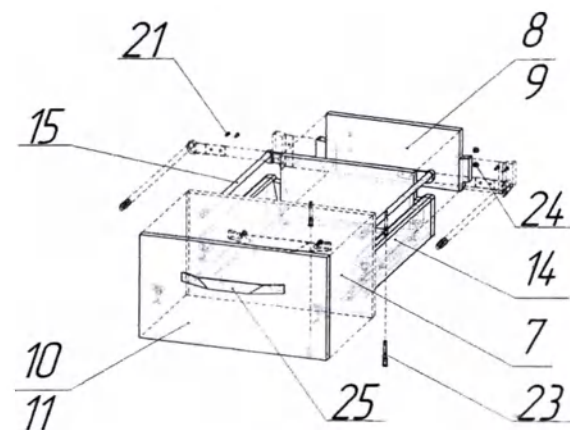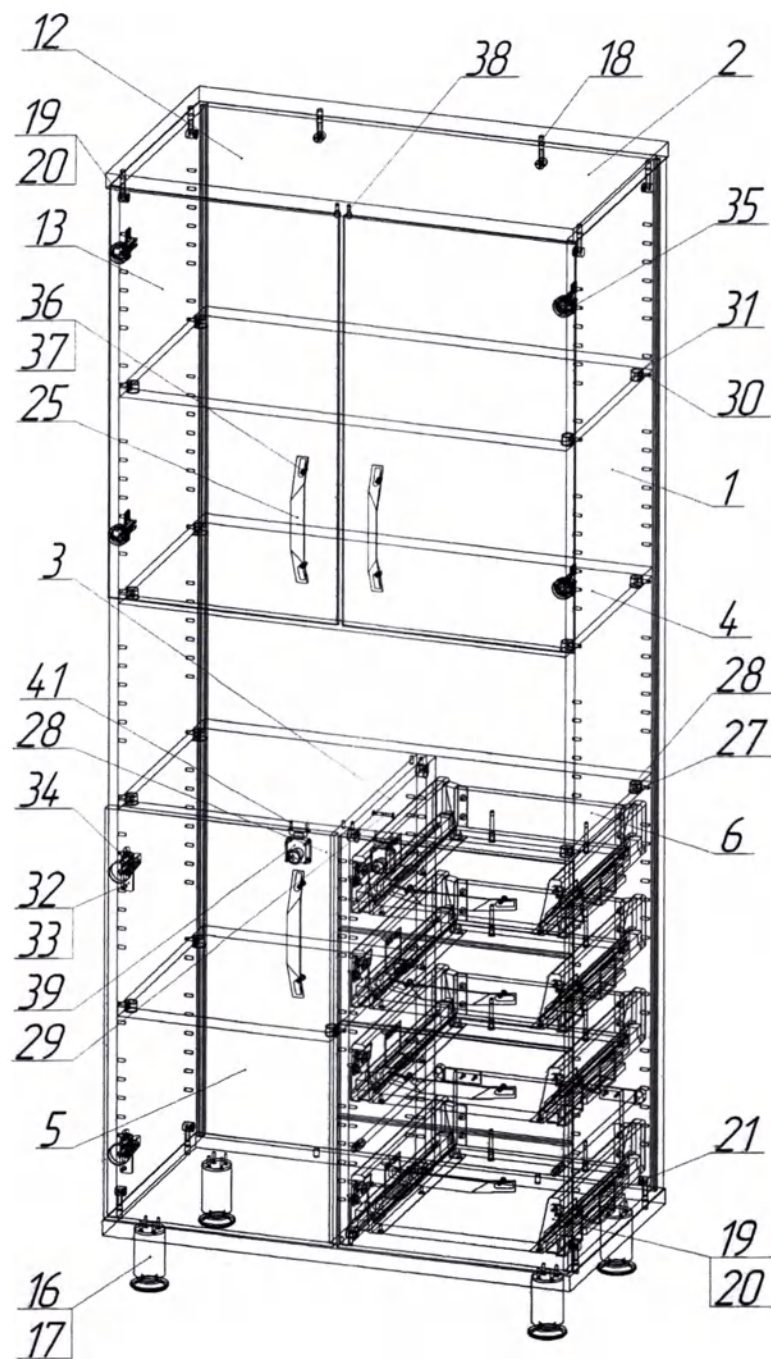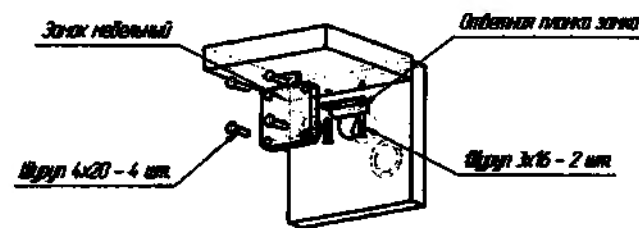

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-27 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 800±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-27		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция – с дверками, оснащена съемной полкой ЛДСП, нижняя – с дверкой, четыре выдвижных ящика, съемная полка ЛДСП. Средняя секция - открытая ниша. Все дверки и верхний ящик закрываются на замки.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
	Пакет №1:		
1.	Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель перегородки		2 шт.
4.	Панель полки съемной		2 шт.
5.	Панель дверки		3 шт.
6.	Панель средняя		2 шт.
7.	Панель ящика нижняя		4 шт.
8.	Панель ящика задняя		3 шт.
9.	Панель ящика задняя большая		1 шт.
10.	Панель ящика фасадная		3 шт.
11.	Панель ящика фасадная большая		1 шт.
	Пакет №2:		
12.	Панель задней стенки		1 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
	Пакет №3:		
13.	Комплект ящика Unni		4 шт.
14.	Рейлинг продольный Unni		1 шт.
15.	Опора регулируемая		4 шт.
16.	Шуруп 4x20		24 шт.
17.	Шток эксцентрика		10 шт.
18.	Эксцентрик		10 шт.
19.	Заглушка эксцентрика		10 шт.
20.	Шуруп 3,5x16		54 шт.
21.	Ключ шестигранный		1 шт.
22.	Евровинт 7x50		8 шт.
23.	Шуруп 4,2x13		40 шт.
24.	Ручка-скоба		7 шт.
25.	Шайба 4		14 шт.
26.	Шток эксцентрика усиленного		12 шт.
27.	Эксцентрик усиленный		12 шт.
28.	Стяжка		2 шт.
29.	Винт полкодержателя		8 шт.
30.	Полкодержатель		8 шт.

31.	Петля 4-х шарнирная		6 шт.
32.	Шуруп 4x16		12 шт.
33.	Евровинт 6,3x13		12 шт.
34.	Полкодержатель для ст. полок		2 шт.
35.	Замок		2 шт.
36.	Замок 1		1 шт.
37.	Ключ от замка		6 шт.
38.	Шуруп 3x16		8 шт.
39.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.

2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (15) при помощи шурупов (16). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (17) до упора.

3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**

4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (18). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (21) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (19).

5. Установить заднюю стенку (12) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас шкафа сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. Закрутить в подготовленные отверстия панели горизонтальной нижней (2) и панели средней (6) штоки эксцентриков усиленных (26). Вставить эксцентрик усиленный (27) в подготовленные отверстия полки при помощи резинового молотка.

Стянуть друг другом панели перегородок (3) при помощи стяжки межсекционной (28) так, как показано на схеме сборки, учитывая размеры указанные на схеме установки перегородок (**эксцентрик усиленный должен оказаться в правой секции**).

8. При помощи саморезов (20) прикрепить направляющие Unni (13) к боковым панелям и панелям перегородок изделия в подготовленные наметки крепления.

9. При помощи саморезов (23) прикрепить боковые стенки Unni (13) к панели ящика нижней (7) так, чтобы со стороны, где к направляющим устанавливается панель фасадная ящика панель ящика нижняя была на одном уровне с боковыми стенками Unni (13).

10. Вставить держатели задней стенки направляющих Unni (13) в боковые стенки Unni (13). При помощи саморезов (21) прикрепить панель ящика заднюю (8,9) к держателям задней стенки направляющих Unni (13). Затем закрутить евровинты (22) в подготовленные отверстия панели ящика нижней (7).

11. При помощи шурупов (20) прикрепить к панели фасадной ящика (10,11) держатели, для этого необходимо использовать наметки на панели.

12. Отрегулировать ящики согласно схеме регулировки.

13. В подготовленные отверстия установить ручку (24) на панель ящика фасадную (10,11) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (25).

14. При помощи подготовленных отверстий в панели фасадной нижнего ящика (11), установить рейлинг продольный Unni (14) и закрепить его к панели ящика задней (9) при помощи шурупов (20).

15. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (31) на панель дверки (5), двумя шурупами (32) каждую.

16. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (33), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

17. Отрегулировать положение панели дверки и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (**см. схему**).

18. Установить ручку (24) на панель дверки (5) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (25).


19. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (**см. схему**) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (26). Вставить эксцентрик усиленный (27) в подготовленные отверстия средней панели (6) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.

20. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (**см. схему**) диаметром 5 винт полкодержателя (29) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (30) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.

21. Установить в подготовленное отверстие верхнюю панель и дверку (5) замок мебельный (35). Закрепить его шурупами (16). К верхней панели (2) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (37).
22. Установить в подготовленное отверстие замок мебельный (36). Закрепить его шурупами (32). К средней панели (6) и к левой дверки прикрепить ответные планки замка при помощи шурупов (38).
23. Установить в подготовленные отверстия панелей горизонтальных полкодержатели (34).
24. Шкаф готов к эксплуатации.



Способ регулирования 4-х шарнирной петли

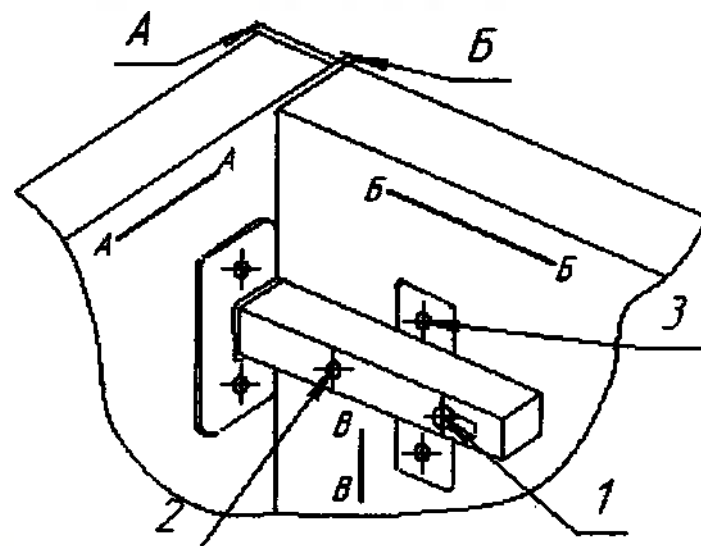

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверьми – 3 мм.
Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.



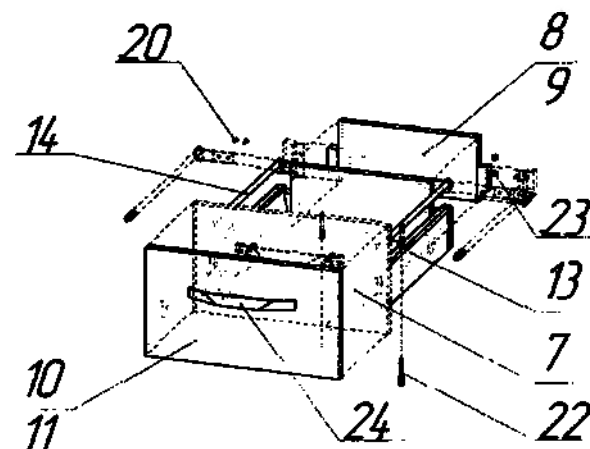


Схема установки замка мебельного (при наличии)

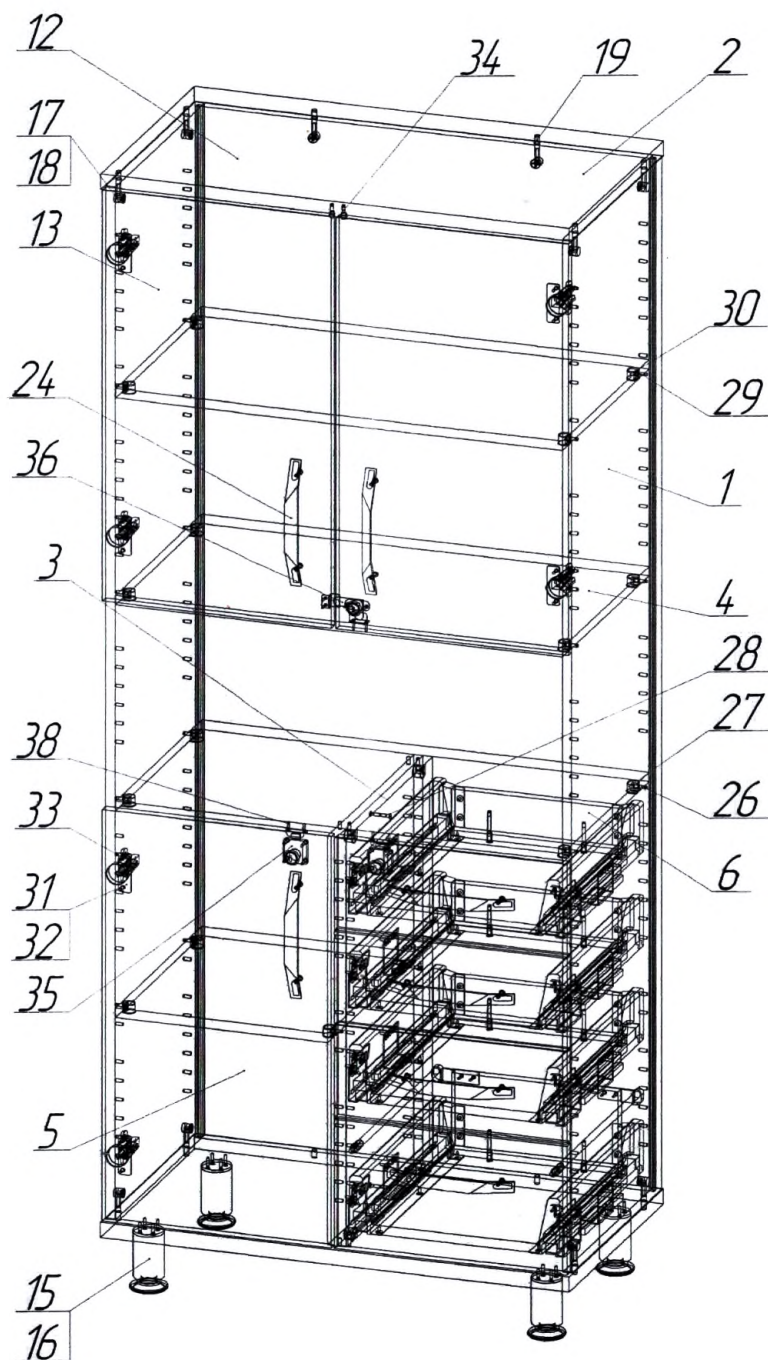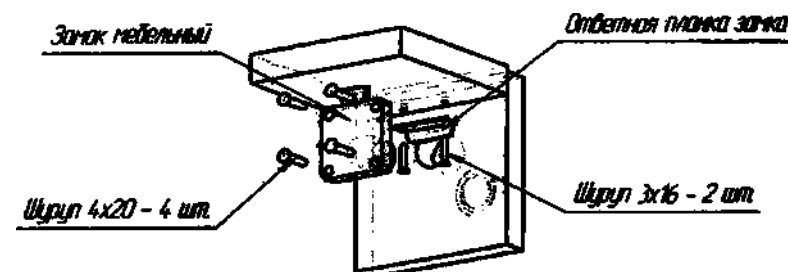

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-28 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 800±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-28		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция – с дверками, оснащена двумя съемными полками ЛДСП, нижняя – с дверкой, четыре выдвижных ящика, съемная полка ЛДСП. Все дверки и верхний ящик закрываются на замки.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
	Пакет №1:		
1.	Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель перегородки		2 шт.
4.	Панель полки съемной		3 шт.
5.	Панель дверки		3 шт.
6.	Панель средняя		1 шт.
7.	Панель ящика нижняя		4 шт.
8.	Панель ящика задняя		3 шт.
9.	Панель ящика задняя большая		1 шт.
10.	Панель ящика фасадная		3 шт.
11.	Панель ящика фасадная большая		1 шт.
	Пакет №2:		
12.	Панель задней стенки		1 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
	Пакет №3:		
13.	Комплект ящика Unni		4 шт.
14.	Рейлинг продольный Unni		1 шт.
15.	Опора регулируемая		4 шт.
16.	Шуруп 4x20		24 шт.
17.	Шток эксцентрика		10 шт.
18.	Эксцентрик		10 шт.
19.	Заглушка эксцентрика		10 шт.
20.	Шуруп 3,5x16		52 шт.
21.	Ключ шестигранный		1 шт.
22.	Евровинт 7x50		8 шт.
23.	Шуруп 4,2x13		40 шт.
24.	Ручка-скоба		7 шт.
25.	Шайба 4		14 шт.
26.	Шток эксцентрика усиленного		8 шт.
27.	Эксцентрик усиленный		8 шт.
28.	Стяжка		2 шт.
29.	Винт полкодержателя		12 шт.
30.	Полкодержатель		12 шт.

31.	Петля 4-х шарнирная		6 шт.
32.	Шуруп 4x16		12 шт.
33.	Евровинт 6,3x13		12 шт.
34.	Полкодержатель для ст. полок		2 шт.
35.	Замок		2 шт.
36.	Замок 1		1 шт.
37.	Ключ от замка		6 шт.
38.	Шуруп 3x16		8 шт.
39.	Шуруп 3,5x16		2 шт.
40.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.

2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (15) при помощи шурупов (16). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (17) до упора.

3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**

4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (18). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (21) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (19).

5. Установить заднюю стенку (12) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас шкафа сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. Закрутить в подготовленные отверстия панели горизонтальной нижней (2) и панели средней (6) штоки эксцентриков усиленных (26). Вставить

Стянуть друг друга углом панели перегородок (3) при помощи стяжки межсекционной (8) так, как показано на схеме сборки, учитывая размеры указанные на схеме установки перегородок (**эксцентрик усиленный должен оказаться в правой секции**).

8. При помощи саморезов (20) прикрепить направляющие Unni (13) к боковым панелям и панелям перегородок изделия в подготовленные наметки крепления.

9. При помощи саморезов (23) прикрепить боковые стенки Unni (13) к панели ящика нижней (7) так, чтобы со стороны, где к направляющим устанавливается панель фасадная ящика панель ящика нижняя была на одном уровне с боковыми стенками Unni (13).

10. Вставить держатели задней стенки направляющих Unni (13) в боковые стенки Unni (13). При помощи саморезов (21) прикрепить панель ящика заднюю (8,9) к держателям задней стенки направляющих Unni (13). Затем закрутить евровинты (22) в подготовленные отверстия панели ящика нижней (7).

11. При помощи шурупов (20) прикрепить к панели фасадной ящика (10,11) держатели, для этого необходимо использовать наметки на панели.

12. Отрегулировать ящики согласно схеме регулировки.

13. В подготовленные отверстия установить ручку (24) на панель ящика фасадную (10,11) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (25).

14. При помощи подготовленных отверстий в панели фасадной нижнего ящика (11), установить рейлинг продольный Unni (14) и закрепить его к панели ящика задней (9) при помощи шурупов (20).

15. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (31) на панель дверки (5), двумя шурупами (32) каждую.

16. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (33), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

17. Отрегулировать положение панели дверки и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (**см. схему**).

18. Установить ручку (24) на панель дверки (5) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (25).

19. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (**см. схему**) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (26). Вставить эксцентрик усиленный (27) в подготовленные отверстия средней панели (6) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.

20. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (**см. схему**) диаметром 5 винт полкодержателя (29) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (30) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.


эксцентрик усиленный (27) в подготовленные отверстия полки при помощи резинового молотка.

21. Установить в подготовленное отверстие верхнего ящика и дверки (5) замок мебельный (35). Закрепить его шурупами (16). К верхней панели (2) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (37).


22. Установить в подготовленное отверстие замок мебельный (36). Закрепить его шурупами (32). К средней панели (6) и к левой дверки прикрепить ответные планки замка при помощи шурупов (38).

23. Установить в подготовленные отверстия панелей горизонтальных (2) полкодержатели (34).

24. Шкаф готов к эксплуатации.

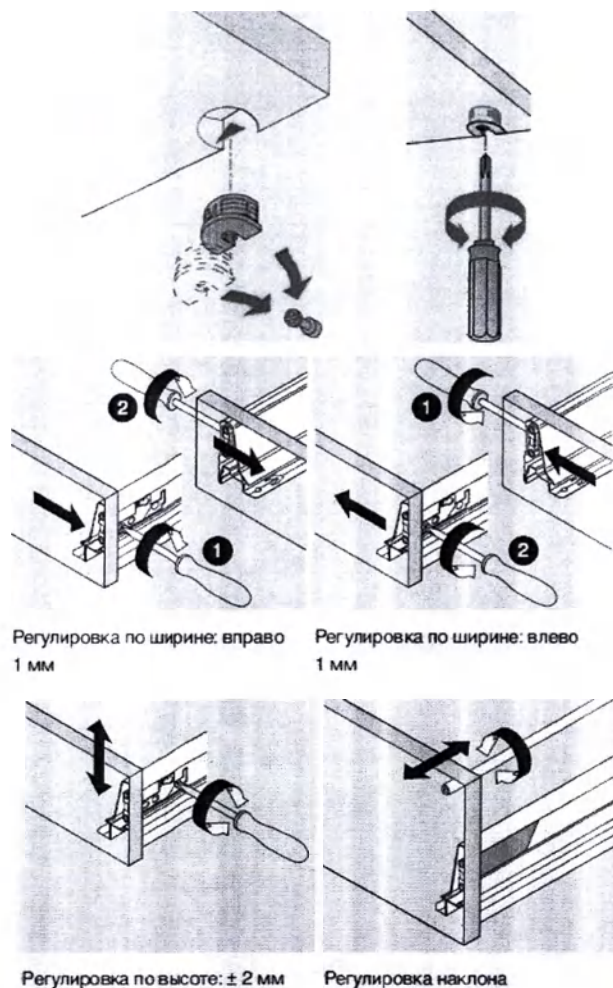

порядок регулирования 4-х шарнирной петли

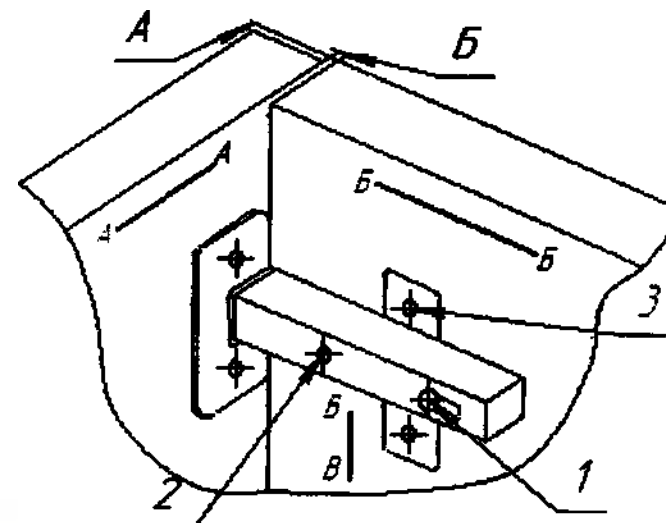

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями - 3 мм.
Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.



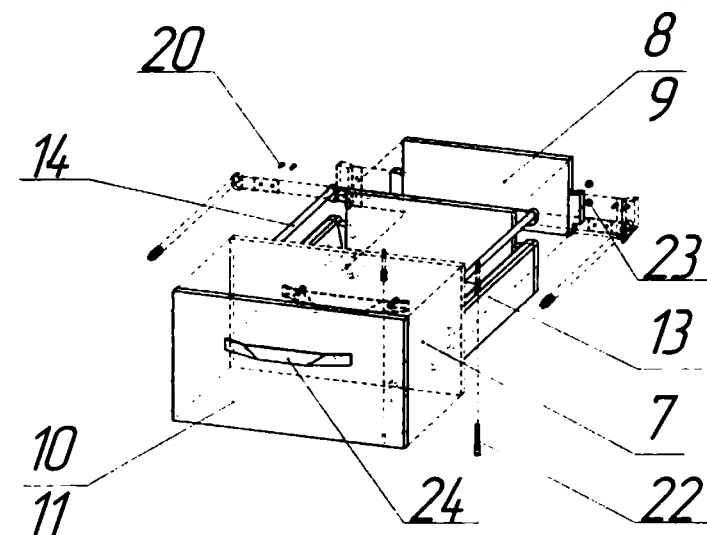


Схема установки замка мебельного (при наличии)

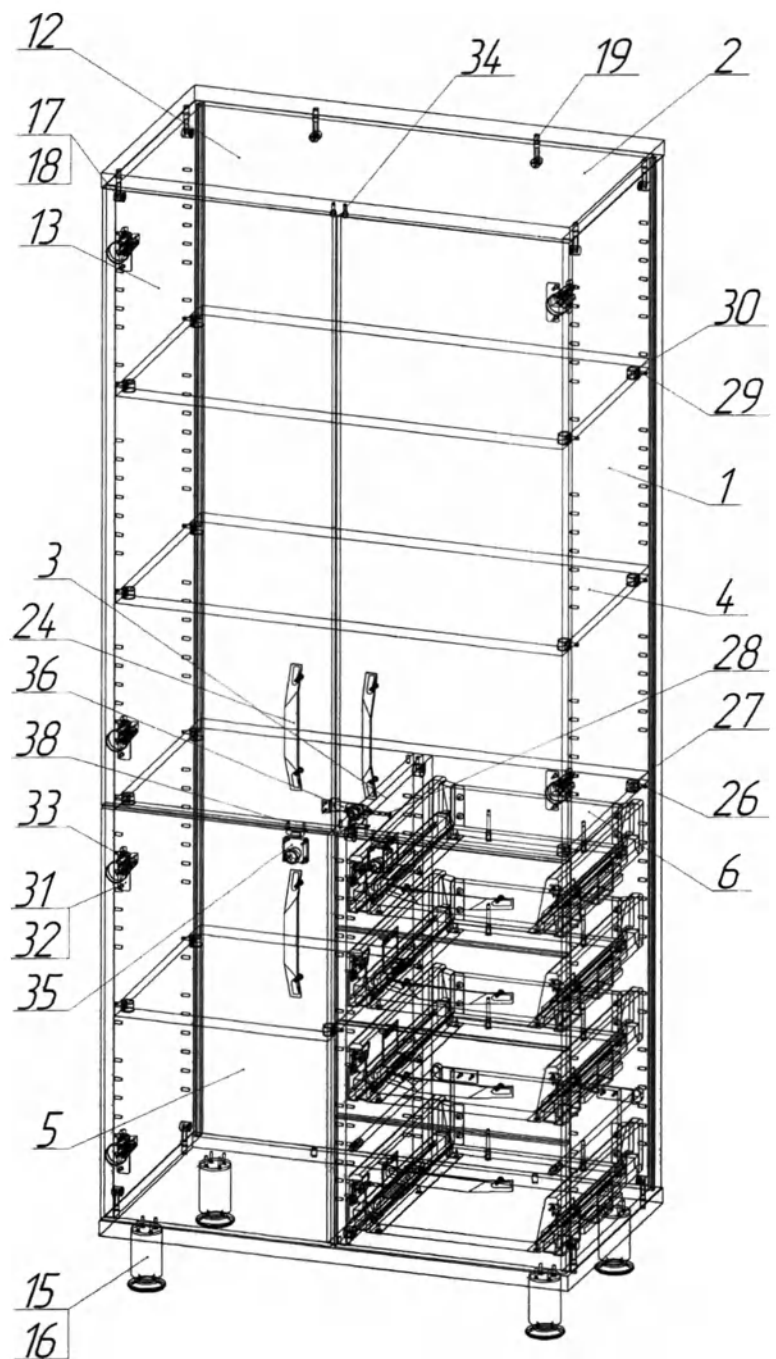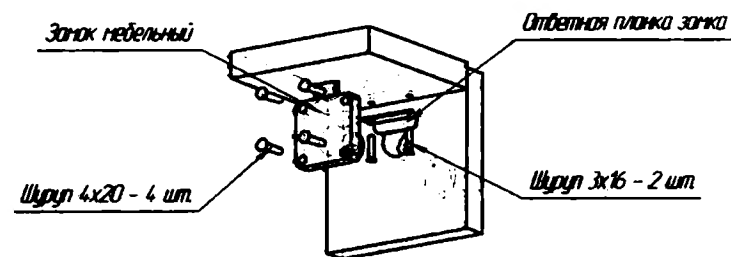

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-29 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 800±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-29		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция – дверки стекло, оснащена двумя съемными полками ЛДСП, нижняя – восемь выдвижных ящиков. Все дверки и верхний ящик закрываются на замки.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
	Пакет №1:		
1.	Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель перегородки		2 шт.
4.	Панель полки съемной		2 шт.
5.	Панель средняя		1 шт.
6.	Панель ящика нижняя		8 шт.
7.	Панель ящика задняя		6 шт.
8.	Панель ящика задняя большая		2 шт.
9.	Панель ящика фасадная		6 шт.
10.	Панель ящика фасадная большая		2 шт.
	Пакет №2:		
11.	Панель задней стенки		1 шт.
	Пакет №3:		
12.	Панель дверки стекло		2 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
	Пакет №4:		
13.	Комплект ящика Unni		8 шт.
14.	Рейлинг продольный Unni		2 шт.
15.	Опора регулируемая		4 шт.
16.	Шуруп 4x20		24 шт.
17.	Шток эксцентрика		10 шт.
18.	Эксцентрик		10 шт.
19.	Заглушка эксцентрика		10 шт.
20.	Шуруп 3,5x16		104 шт.
21.	Ключ шестигранный		1 шт.
22.	Евровинт 7x50		16 шт.
23.	Шуруп 4,2x13		80 шт.
24.	Ручка-скоба		10 шт.
25.	Шайба 4		16 шт.
26.	Шток эксцентрика усиленного		8 шт.
27.	Эксцентрик усиленный		8 шт.
28.	Стяжка		2 шт.
29.	Винт полкодержателя		8 шт.
30.	Полкодержатель		8 шт.

31.	Петля для ст. дверки		4 шт.
32.	Втулка		4 шт.
33.	Евровинт 6,3x13		8 шт.
34.	Винт М4х12		4 шт.
35.	Полкодержатель для ст. полок		2 шт.
36.	Замок		2 шт.
37.	Ключ от замка		4 шт.
38.	Шуруп 3x16		4 шт.
39.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.

2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (15) при помощи шурупов (16). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (17) до упора.

3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**

4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (18). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (21) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (19).

5. Установить заднюю стенку (11) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас шкафа сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. Закрутить в подготовленные отверстия панели горизонтальной нижней

(2) и панели средней (5) штоки эксцентриков усиленных (26). Вставить эксцентрик усиленный (27) в подготовленные отверстия полки при помощи резинового молотка.

Стянуть друг с другом панели перегородок (3) при помощи стяжки межсекционной (28) так, как показано на схеме сборки, учитывая размеры указанные на схеме установки перегородок (**эксцентрик усиленный должен оказаться в правой секции**).

8. При помощи саморезов (20) прикрепить направляющие Unni (13) к боковым панелям и панелям перегородок изделия в подготовленные наметки крепления.

9. При помощи саморезов (23) прикрепить боковые стенки Unni (13) к панели ящика нижней (6) так, чтобы со стороны, где к направляющим устанавливается панель фасадная ящика панель ящика нижняя была на одном уровне с боковыми стенками Unni (13).

10. Вставить держатели задней стенки направляющих Unni (13) в боковые стенки Unni (13). При помощи саморезов (20) прикрепить панель ящика заднюю (7,8) к держателям задней стенки направляющих Unni (13). Затем закрутить евровинты (22) в подготовленные отверстия панели ящика нижней (6).

11. При помощи шурупов (20) прикрепить к панели фасадной ящика (9,10) держатели, для этого необходимо использовать наметки на панели.

12. Отрегулировать ящики согласно схеме регулировки.

13. В подготовленные отверстия установить ручку (24) на панель ящика фасадную (9,10) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (25).

14. При помощи подготовленных отверстий в панели фасадной нижнего ящика (10), установить рейлинг продольный Unni (14) и закрепить его к панели ящика задней (8) при помощи шурупов (20).

15. Прикрепить шарнирные петли (31) для стеклянных дверок (12) согласно схеме сборки петли (**см. схему**). Для этого необходимо вставить чашку петли в подготовленное отверстие стеклянной дверки с внутренней стороны, с лицевой стороны зафиксировать петлю при помощи вкладки и установочных винтов. Закрепить вкладку декоративной крышечкой.

16. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (33), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

17. Установить ручку (24) на панели ящиков (9;10) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (25).

18. Установить ручку (24) на панель дверки (12) при помощи втулки (32) и винта М4х12 (33).

19. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (**см. схему**) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (26). Вставить


эксцентрик усиленный (27) в подготовленные отверстия средней панели (5) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.

20. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (29) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (30) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.

21. Установить в подготовленное отверстие верхних ящиков (9) замок мебельный (36). Закрепить его шурупами (16). К средней панели (5) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (38).

22. Установить в подготовленные отверстия панелей горизонтальных (2) полкодержатели (35).

23. Шкаф готов к эксплуатации.

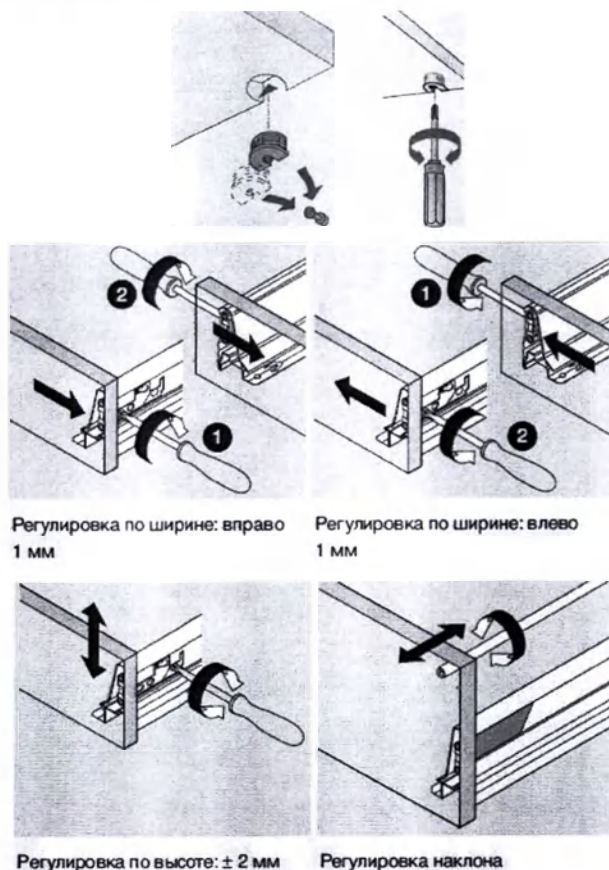


Регулировка по ширине: вправо 1 мм

Регулировка по ширине: влево 1 мм

Регулировка по высоте: ± 2 мм

Регулировка наклона

Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

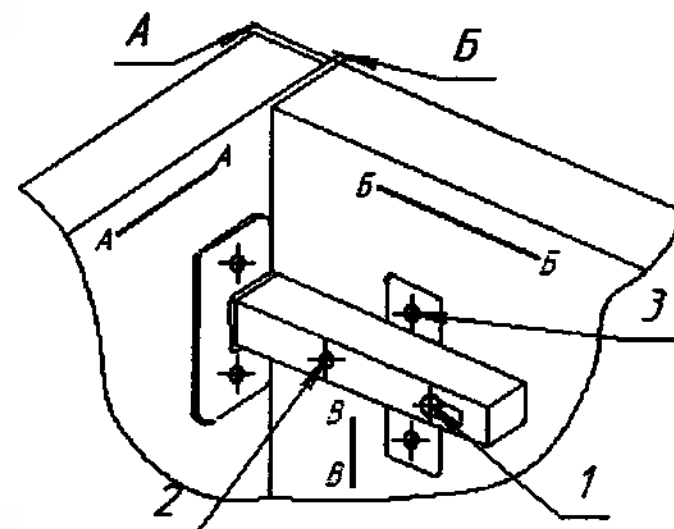

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулирующим винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверьми – 3 мм.
Во избежание поломки петли открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.




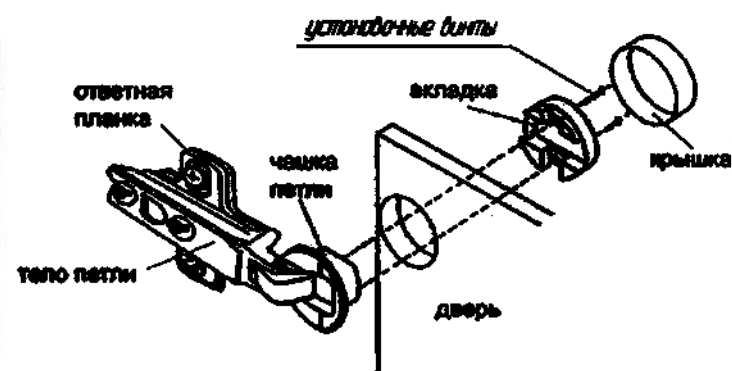


Схема установки замка мебельного (при наличии)

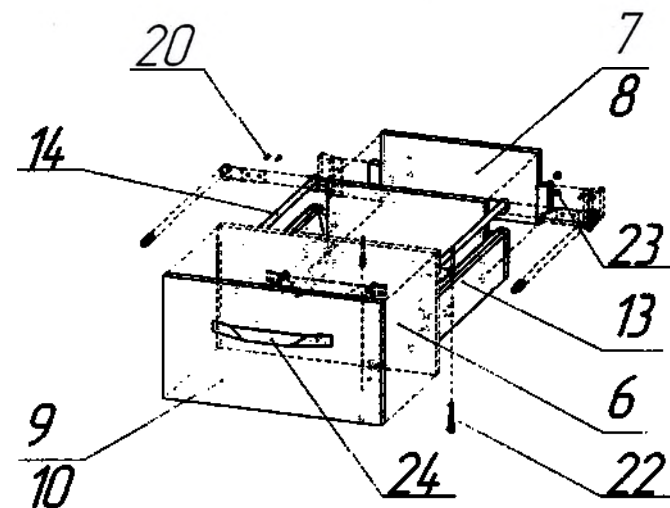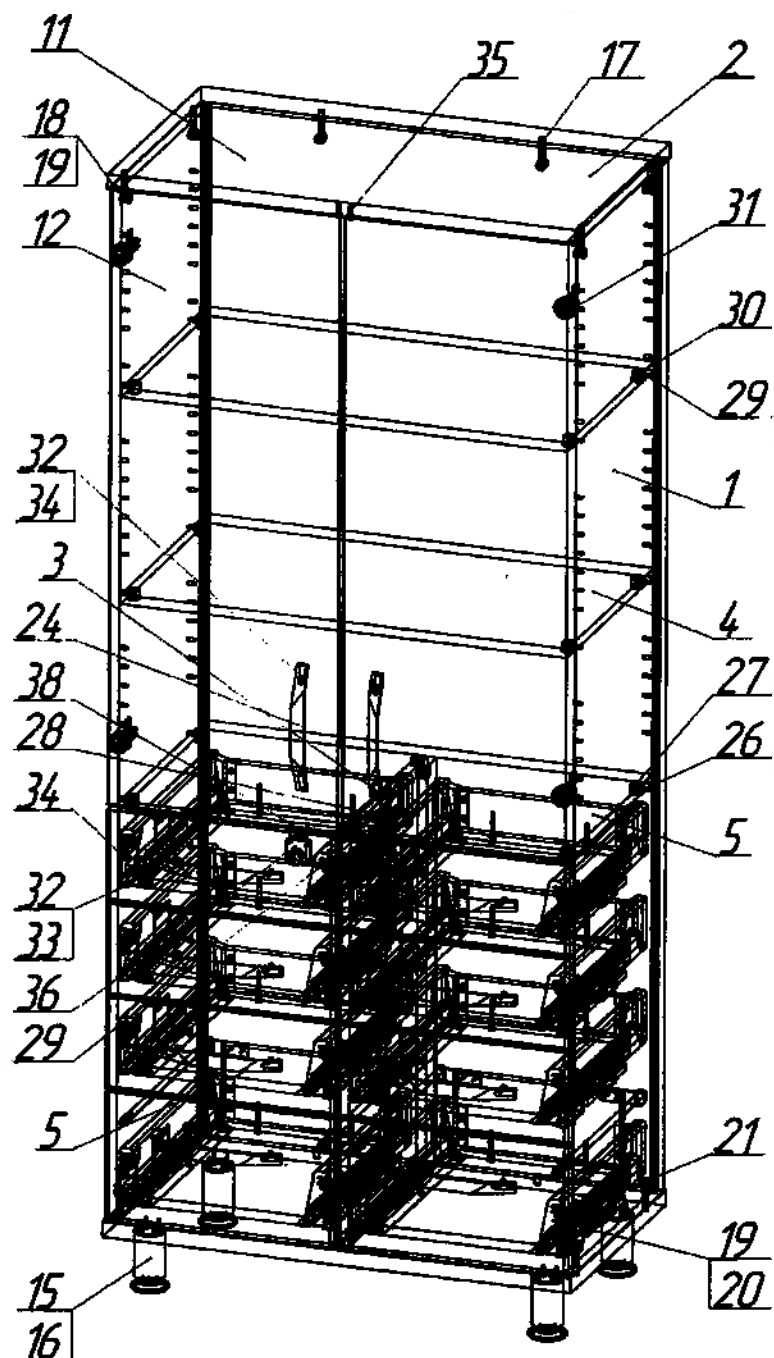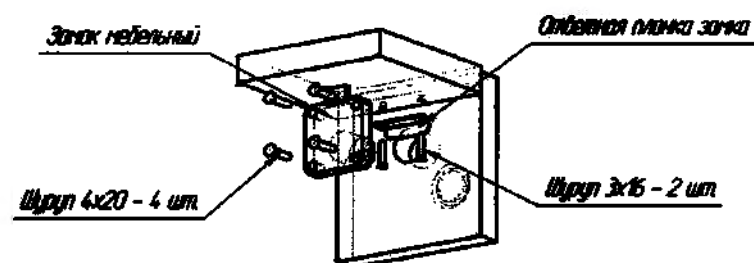

31.	Петля для ст. дверки		4 шт.
32.	Втулка		4 шт.
33.	Евровинт 6,3x13		8 шт.
34.	Винт М4х12		4 шт.
35.	Полкодержатель для ст. полок		2 шт.
36.	Замок		2 шт.
37.	Ключ замка		4 шт.
38.	Шуруп 3x16		4 шт.
39.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.

2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (15) при помощи шурупов (16). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (17) до упора.

3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**

4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (18). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (21) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (19).

5. Установить заднюю стенку (11) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас шкафа сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

(2) и панели средней (5) штоки эксцентриков усиленных (26). Вставить эксцентрик усиленный (27) в подготовленные отверстия полки при помощи резинового молотка.

Стянуть друг с другом панели перегородок (3) при помощи стяжки межсекционной (28) так, как показано на схеме сборки, учитывая размеры указанные на схеме установки перегородок (**эксцентрик усиленный должен оказаться в правой секции**).

8. При помощи саморезов (20) прикрепить направляющие Unnihopper (13) к боковым панелям и панелям перегородок изделия в подготовленные наметки крепления.

9. При помощи саморезов (23) прикрепить боковые стенки Unnihopper (13) к панели ящика нижней (6) так, чтобы со стороны, где к направляющим устанавливается панель фасадная ящика панель ящика нижняя была на одном уровне с боковыми стенками Unnihopper (13).

10. Вставить держатели задней стенки направляющих Unnihopper (13) в боковые стенки Unnihopper (13). При помощи саморезов (20) прикрепить панель ящика заднюю (7,8) к держателям задней стенки направляющих Unnihopper (13). Затем закрутить евровинты (22) в подготовленные отверстия панели ящика нижней (6).

11. При помощи шурупов (20) прикрепить к панели фасадной ящика (9,10) держатели, для этого необходимо использовать наметки на панели.

12. Отрегулировать ящики согласно схеме регулировки.

13. В подготовленные отверстия установить ручку (24) на панель ящика фасадную (9,10) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (25).

14. При помощи подготовленных отверстий в панели фасадной нижнего ящика (10), установить рейлинг продольный Unnihopper (14) и закрепить его к панели ящика задней (8) при помощи шурупов (20).

15. Прикрепить шарнирные петли (31) для стеклянных дверок (12) согласно схеме сборки петли (**см. схему**). Для этого необходимо вставить чашку петли в подготовленное отверстие стеклянной дверки с внутренней стороны, с лицевой стороны зафиксировать петлю при помощи вкладки и установочных винтов. Закрепить вкладку декоративной крышечкой.

16. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (33), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

17. Установить ручку (24) на панели ящиков (9;10) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (25).

18. Установить ручку (24) на панель дверки (12) при помощи втулки (32) и винта М4х12 (33).

19. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (**см. схему**) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (26). Вставить

7. Закрутить в подготовленные отверстия панели горизонтальной нижней



эксцентрик усиленный (27) в подготовленные отверстия средней панели (5) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.

20. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 винт полкодержателя (29) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (30) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.


21. Установить в подготовленное отверстие верхних ящиков (9) замок мебельный (36). Закрепить его шурупами (16). К средней панели (5) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (38).

22. Установить в подготовленные отверстия панелей горизонтальных (2) полкодержатели (35).

23. Шкаф готов к эксплуатации.

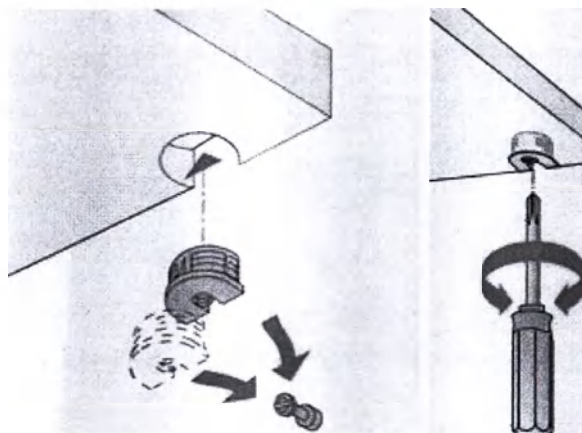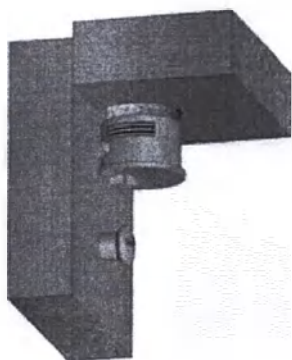


Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

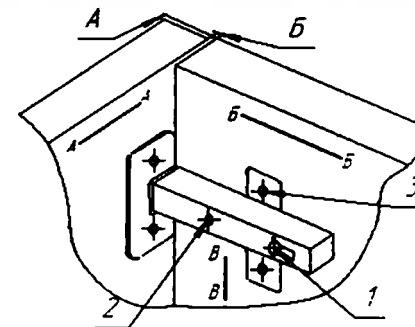


Регулирование петли осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам: указанным стрелками А-А и В-В и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.


1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлении по стрелкам В-В, изменяя размер "В".
2. Регулирующим винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями - 3 мм. Во избежание поломки петлю открывать и закрывать дверь следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

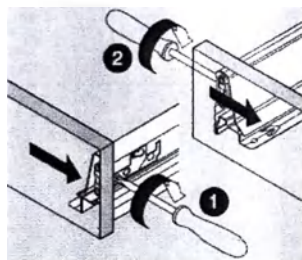


Регулировка по ширине: вправо
1 мм

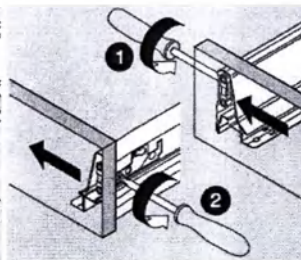


Регулировка по ширине: влево
1 мм

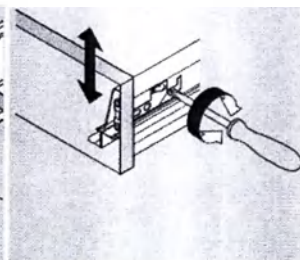


Регулировка по высоте: ± 2 мм


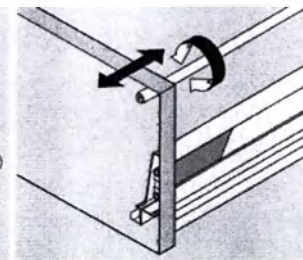


Регулировка наклона

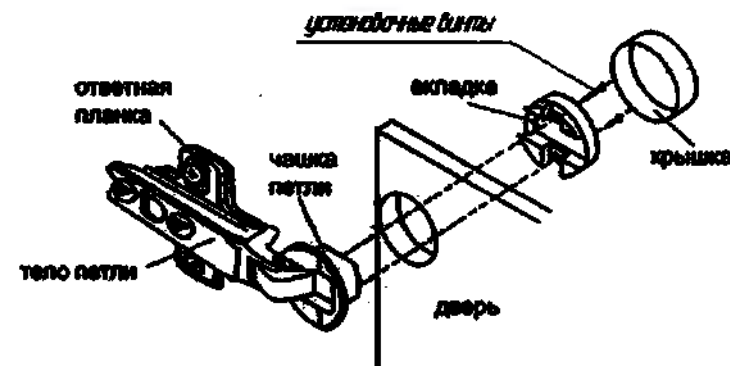

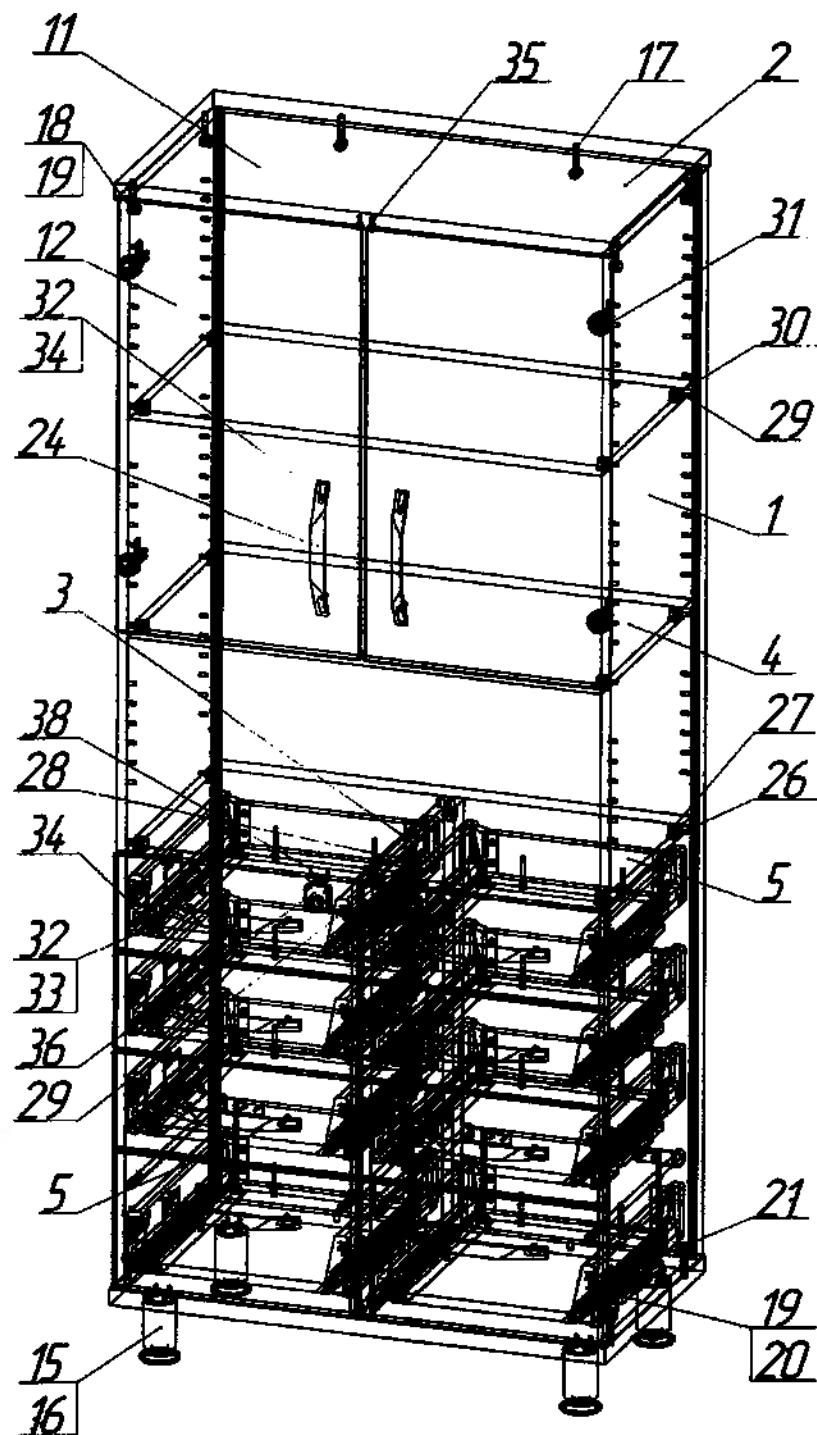

1а установка замка мебельного (при наличии)

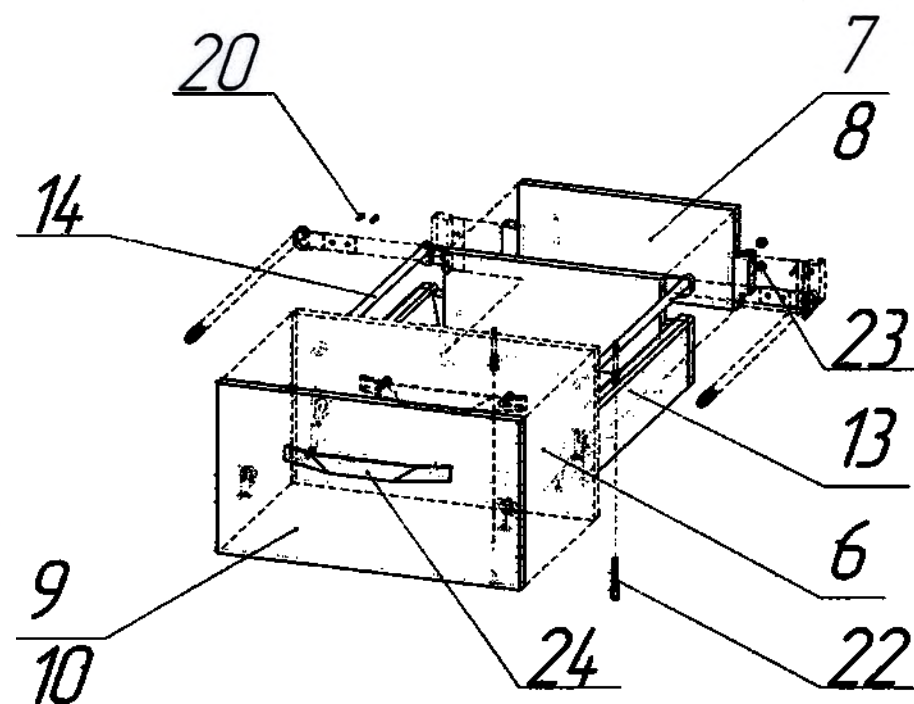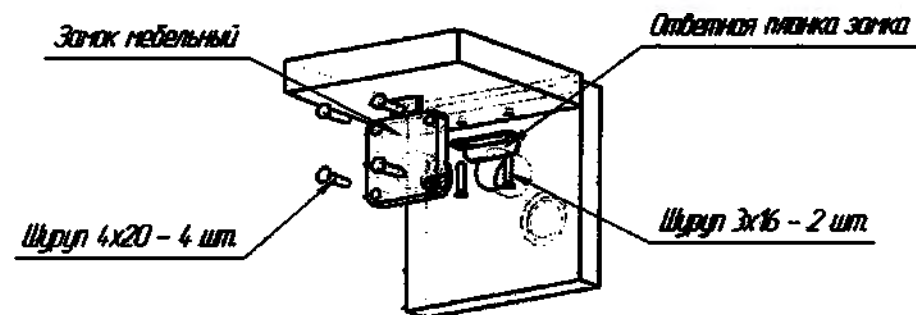

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-31 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 800±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-31		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция – с дверками, оснащена двумя съемными полками ЛДСП, нижняя – восемь выдвижных ящиков. Верхние дверки и два верхних ящика закрываются на замки.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
	Пакет №1:		
1.	Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель перегородки		2 шт.
4.	Панель полки съемной		2 шт.
5.	Панель дверки		2 шт.
6.	Панель средняя		1 шт.
7.	Панель ящика нижняя		8 шт.
8.	Панель ящика задняя		6 шт.
9.	Панель ящика задняя большая		2 шт.
10.	Панель ящика фасадная		6 шт.
11.	Панель ящика фасадная большая		2 шт.
	Пакет №2:		
12.	Панель задней стенки		1 шт.

№	Наименование	Изображение	Количество
	Пакет №3:		
13.	Комплект ящика Unni		8 шт.
14.	Рейлинг продольный Unni		2 шт.
15.	Опора регулируемая		4 шт.
16.	Шуруп 4x20		24 шт.
17.	Шток эксцентрика		10 шт.
18.	Эксцентрик		10 шт.
19.	Заглушка эксцентрика		10 шт.
20.	Шуруп 3,5x16		104 шт.
21.	Ключ шестигранный		1 шт.
22.	Евровинт 7x50		16 шт.
23.	Шуруп 4,2x13		80 шт.
24.	Ручка-скоба		10 шт.
25.	Шайба 4		20 шт.
26.	Шток эксцентрика усиленного		8 шт.
27.	Эксцентрик усиленный		8 шт.
28.	Стяжка		2 шт.
29.	Винт полкодержателя		8 шт.
30.	Полкодержатель		8 шт.

31.	Петля 4-х шарнирная		4 шт.
32.	Шуруп 4x16		8 шт.
33.	Евровинт 6,3x13		8 шт.
34.	Полкодержатель для ст. полок		2 шт.
35.	Замок		2 шт.
36.	Замок 1		1 шт.
37.	Ключ от замка		6 шт.
38.	Шуруп 3x16		8 шт.
39.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.

2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (15) при помощи шурупов (16). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (17) до упора.

3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**

4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (18). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (21) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (19).

5. Установить заднюю стенку (12) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас шкафа сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. Закрутить в подготовленные отверстия панели горизонтальной нижней (2) и панели средней (6) штоки эксцентриков усиленных (26). Вставить эксцентрик усиленный (27) в подготовленные отверстия полки при

Стянуть друг с другом панели перегородок (3) при помощи стяжки межсекционной (3) так, как показано на схеме сборки, учитывая размеры указанные на схеме установки перегородок (**эксцентрик усиленный должен оказаться в правой секции**).

8. При помощи саморезов (20) прикрепить направляющие Unni (13) к боковым панелям и панелям перегородок изделия в подготовленные наметки крепления.

9. При помощи саморезов (23) прикрепить боковые стенки Unni (13) к панели ящика нижней (7) так, чтобы со стороны, где к направляющим устанавливается панель фасадная ящика панель ящика нижняя была на одном уровне с боковыми стенками Unni (13).

10. Вставить держатели задней стенки направляющих Unni (13) в боковые стенки Unni (13). При помощи саморезов (21) прикрепить панель ящика заднюю (8,9) к держателям задней стенки направляющих Unni (13). Затем закрутить евроинты (22) в подготовленные отверстия панели ящика нижней (7).

11. При помощи шурупов (20) прикрепить к панели фасадной ящика (10,11) держатели, для этого необходимо использовать наметки на панели.

12. Отрегулировать ящики согласно схеме регулировки.

13. В подготовленные отверстия установить ручку (24) на панель ящика фасадную (10,11) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (25).

14. При помощи подготовленных отверстий в панели фасадной нижнего ящика (11), установить рейлинг продольный Unni (14) и закрепить его к панели ящика задней (9) при помощи шурупов (20).

15. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (31) на панель дверки (5), двумя шурупами (32) каждую.

16. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (33), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.


17. Отрегулировать положение панели дверки и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (**см. схему**).

18. Установить ручку (24) на панель дверки (5) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (25).


19. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (**см. схему**) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (26). Вставить эксцентрик усиленный (27) в подготовленные отверстия средней панели (6) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.

20. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (**см. схему**) диаметром 5 винт полкодержателя (29) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (30) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.

21. Установить в подготовленное отверстие верхнюю панель и дверки (5) замок мебельный (35). Закрепить его шурупами (16). К верхней панели (2) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (37).
22. Установить в подготовленное отверстие замок мебельный (36). Закрепить его шурупами (32). К средней панели (6) и к левой дверки прикрепить ответные планки замка при помощи шурупов (38).
23. Установить в подготовленные отверстия панелей горизонтальных (2) полкодержатели (34).
24. Шкаф готов к эксплуатации.

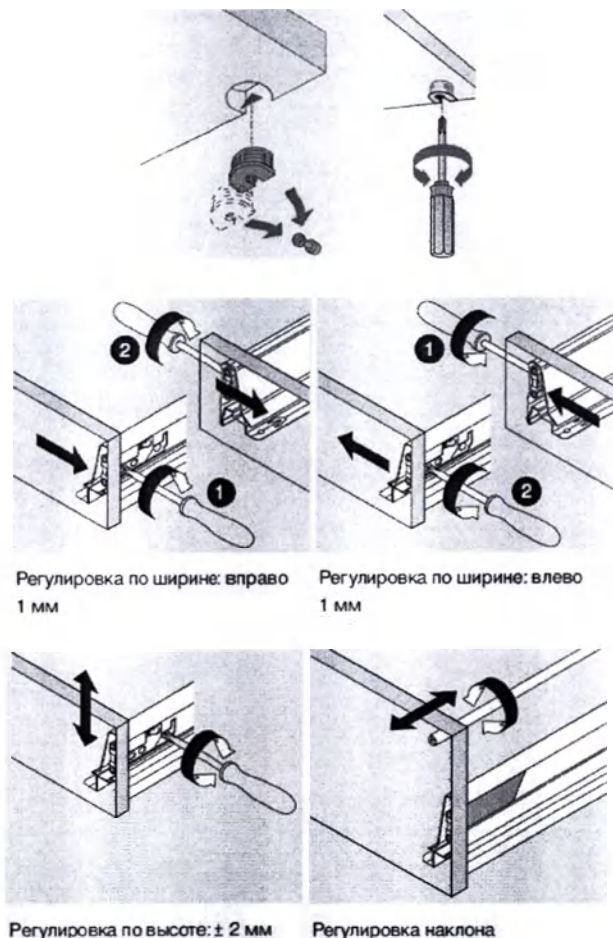

Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

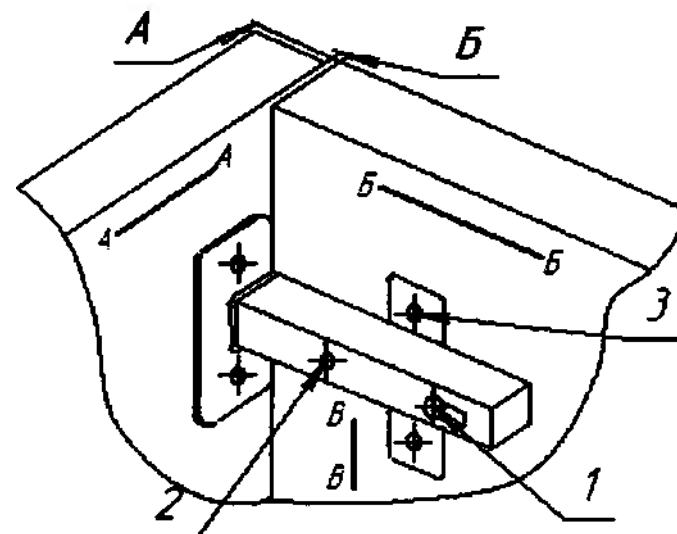

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулирующим винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями – 3 мм.
Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.



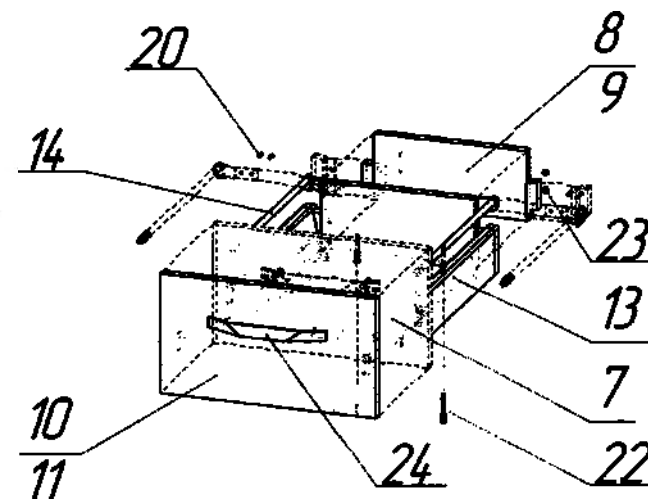


Схема установки замка мебельного (при наличии)

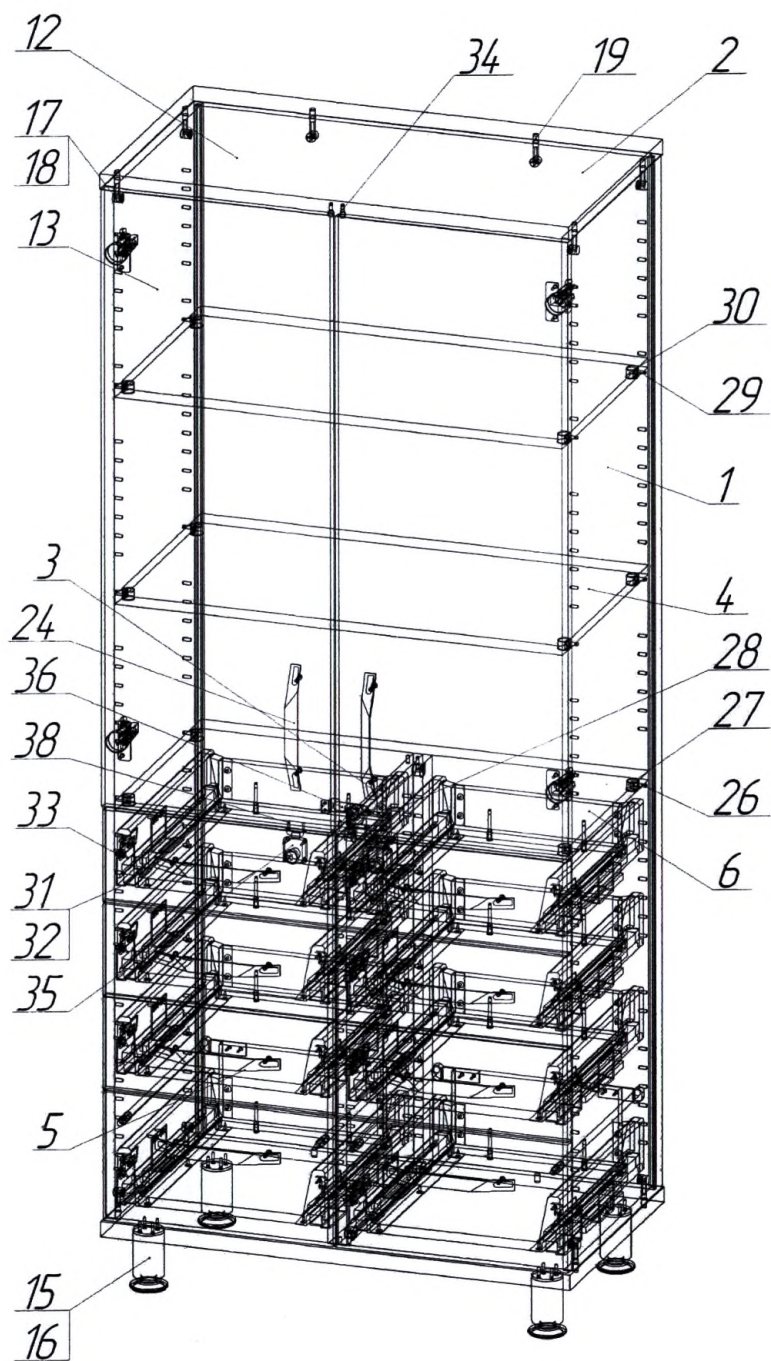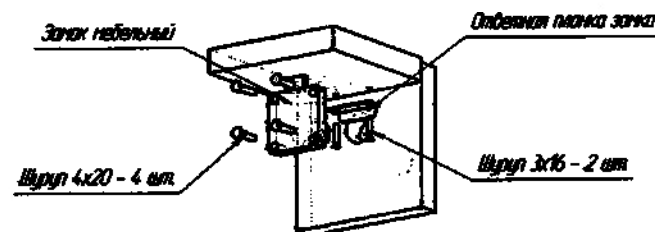

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-32 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание


Габаритные размеры:

Ширина 800±5 мм, глубина 468±5 мм, высота 1912±20 мм.

Исполнение	Внешний вид	Описание
Ш-32		Шкаф из влагостойкой ЛДСП. Верхняя секция – с дверками, оснащена съемной полкой ЛДСП, нижняя – восемь выдвижных ящиков. Средняя секция - открытая ниша. Верхние дверки и два верхних ящика закрываются на замки.

3. Комплект поставки

№	Наименование	Изображение	Количество
	Пакет №1:		
1.	Панель боковая		2 шт.
2.	Панель горизонтальная		2 шт.
3.	Панель перегородки		2 шт.
4.	Панель полки съемной		1 шт.
5.	Панель дверки		2 шт.
6.	Панель средняя		2 шт.
7.	Панель ящика нижняя		8 шт.
8.	Панель ящика задняя		6 шт.
9.	Панель ящика задняя большая		2 шт.
10.	Панель ящика фасадная		6 шт.
11.	Панель ящика фасадная большая		2 шт.
	Пакет №2:		
12.	Панель задней стенки		1 шт.

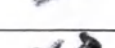№	Наименование	Изображение	Количество
	Пакет №3:		
13.	Комплект ящика Unni		8 шт.
14.	Рейлинг продольный Unni		2 шт.
15.	Опора регулируемая		4 шт.
16.	Шуруп 4x20		24 шт.
17.	Шток эксцентрика		10 шт.
18.	Эксцентрик		10 шт.
19.	Заглушка эксцентрика		10 шт.
20.	Шуруп 3,5x16		106 шт.
21.	Ключ шестигранный		1 шт.
22.	Евровинт 7x50		16 шт.
23.	Шуруп 4,2x13		80 шт.
24.	Ручка-скоба		10 шт.
25.	Шайба 4		20 шт.
26.	Шток эксцентрика усиленного		12 шт.
27.	Эксцентрик усиленный		12 шт.
28.	Стяжка		2 шт.
29.	Винт полкодержателя		4 шт.
30.	Полкодержатель		4 шт.

104

31.	Петля 4-х шарнирная		4 шт.
32.	Шуруп 4x16		8 шт.
33.	Евровинт 6,3x13		8 шт.
34.	Полкодержатель для ст. полок		2 шт.
35.	Замок		2 шт.
36.	Замок 1		1 шт.
37.	Ключ замка		6 шт.
38.	Шуруп 3x16		8 шт.
39.	Руководство по эксплуатации		1 шт.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.

2. Уложить панели горизонтальные (2) лицевой стороной на ровную поверхность. В одну из которых, предварительно закрепить опоры (15) при помощи шурупов (16). Вставить в подготовленные отверстия диаметром 8 мм штоки эксцентриков (17) до упора.

3. Перевернуть панель горизонтальную (2) с прикрепленными опорами и установить на нее боковые панели (1), так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия. **Особого давления на панель не прилагать.**

4. Установить в подготовленные отверстия на боковых панелях эксцентрики (18). С помощью крестовой отвертки или шестигранного ключа (21) поворачивая по часовой стрелке эксцентрики притянуть панель горизонтальную к торцам боковых панелей. Закрепить эксцентрики заглушками (19).

5. Установить заднюю стенку (12) в подготовленные пазы в боковых панелях (1) и горизонтальной панели (2) до упора.

6. Перевернуть панель горизонтальную (2) и установить ее на каркас шкафа сверху, так чтобы головки штоков вошли в подготовленные отверстия на боковых панелях. **Особого давления на панель не прилагать.**

7. Закрутить в подготовленные отверстия панели горизонтальной нижней (2) и панели средней (6) штоки эксцентриков усиленных (26). Вставить эксцентрик усиленный (27) в подготовленные отверстия полки при

Стянуть друг с другом панели перегородок (3) при помощи стяжки межсекционной (8) так, как показано на схеме сборки, учитывая размеры указанные на схеме установки перегородок (**эксцентрик усиленный должен оказаться в правой секции**).

8. При помощи саморезов (20) прикрепить направляющие Unni (13) к боковым панелям и панелям перегородок изделия в подготовленные наметки крепления.

9. При помощи саморезов (23) прикрепить боковые стенки Unni (13) к панели ящика нижней (7) так, чтобы со стороны, где к направляющим устанавливается панель фасадная ящика панель ящика нижняя была на одном уровне с боковыми стенками Unni (13).

10. Вставить держатели задней стенки направляющих Unni (13) в боковые стенки Unni (13). При помощи саморезов (21) прикрепить панель ящика заднюю (8,9) к держателям задней стенки направляющих Unni (13). Затем закрутить евровинты (22) в подготовленные отверстия панели ящика нижней (7).

11. При помощи шурупов (20) прикрепить к панели фасадной ящика (10,11) держатели, для этого необходимо использовать наметки на панели.

12. Отрегулировать ящики согласно схеме регулировки.

13. В подготовленные отверстия установить ручку (24) на панель ящика фасадную (10,11) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (25).

14. При помощи подготовленных отверстий в панели фасадной нижнего ящика (11), установить рейлинг продольный Unni (14) и закрепить его к панели ящика задней (9) при помощи шурупов (20).

15. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (31) на панель дверки (5), двумя шурупами (32) каждую.

16. Прикрепить по месту планку шарнирной петли к боковой стенке двумя винтами (33), так чтобы отверстия в планке петли совпадали с подготовленными отверстиями в боковой стенке.

17. Отрегулировать положение панели дверки и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (**см. схему**).

18. Установить ручку (24) на панель дверки (5) при помощи винтов идущих в комплекте. При необходимости использовать шайбы (25).

19. Закрутить в подготовленные отверстия на боковых панелях (**см. схему**) диаметром 5 штоки эксцентриков усиленных (26). Вставить эксцентрик усиленный (27) в подготовленные отверстия средней панели (6) при помощи резинового молотка. Закрепить панель.

20. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (**см. схему**) диаметром 5 винт полкодержателя (29) до упора, т.е. на величину резьбы. Вставить полкодержатель (30) в подготовленные отверстия полки (4) при помощи резинового молотка. Уложить полку на винты полкодержателей.


помощи резинового молотка.

21. Установить в подготовленное отверстие верхнего ящика и дверки (5) замок мебельный (35). Закрепить его шурупами (16). К верхней панели (2) прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов (37).


22. Установить в подготовленное отверстие замок мебельный (36). Закрепить его шурупами (32). К средней панели (6) и к левой дверки прикрепить ответные планки замка при помощи шурупов (38).

23. Установить в подготовленные отверстия панелей горизонтальных (2) полкодержатели (34).

24. Шкаф готов к эксплуатации.

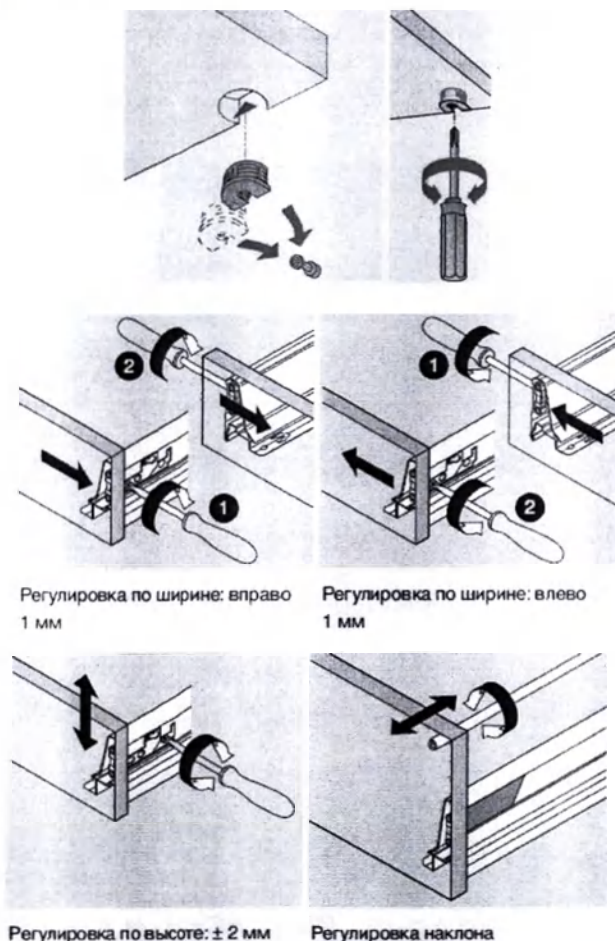

Порядок регулирования 4-х шарнирной петли

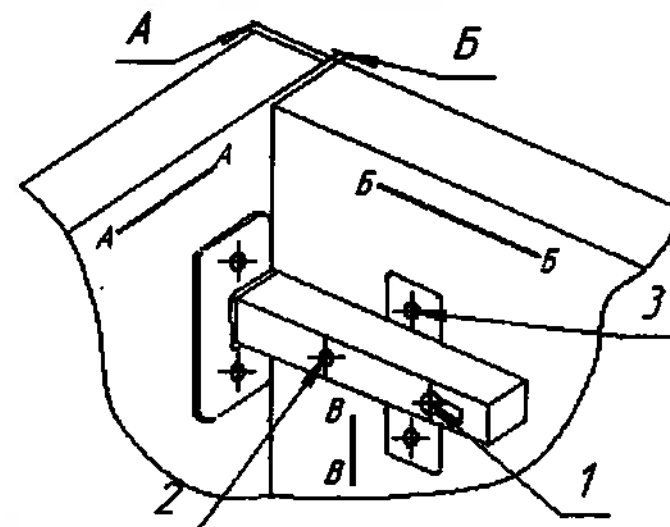

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулирующим винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли заворачиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями – 3 мм.
Во избежание поломки петлей открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.



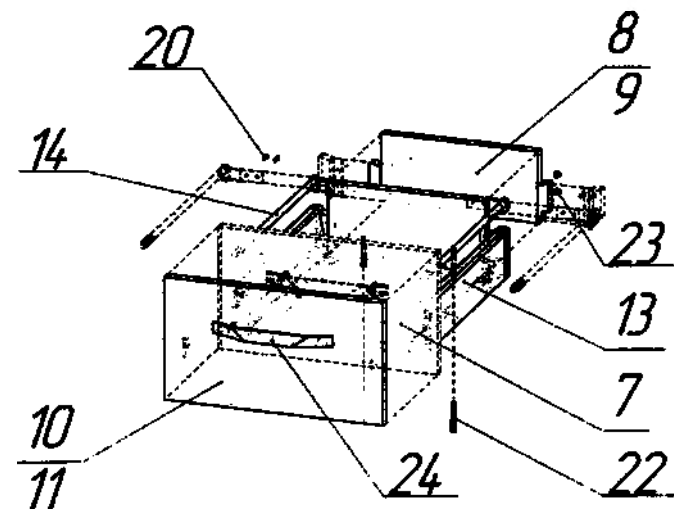


Схема установки замка мебельного (при наличии)

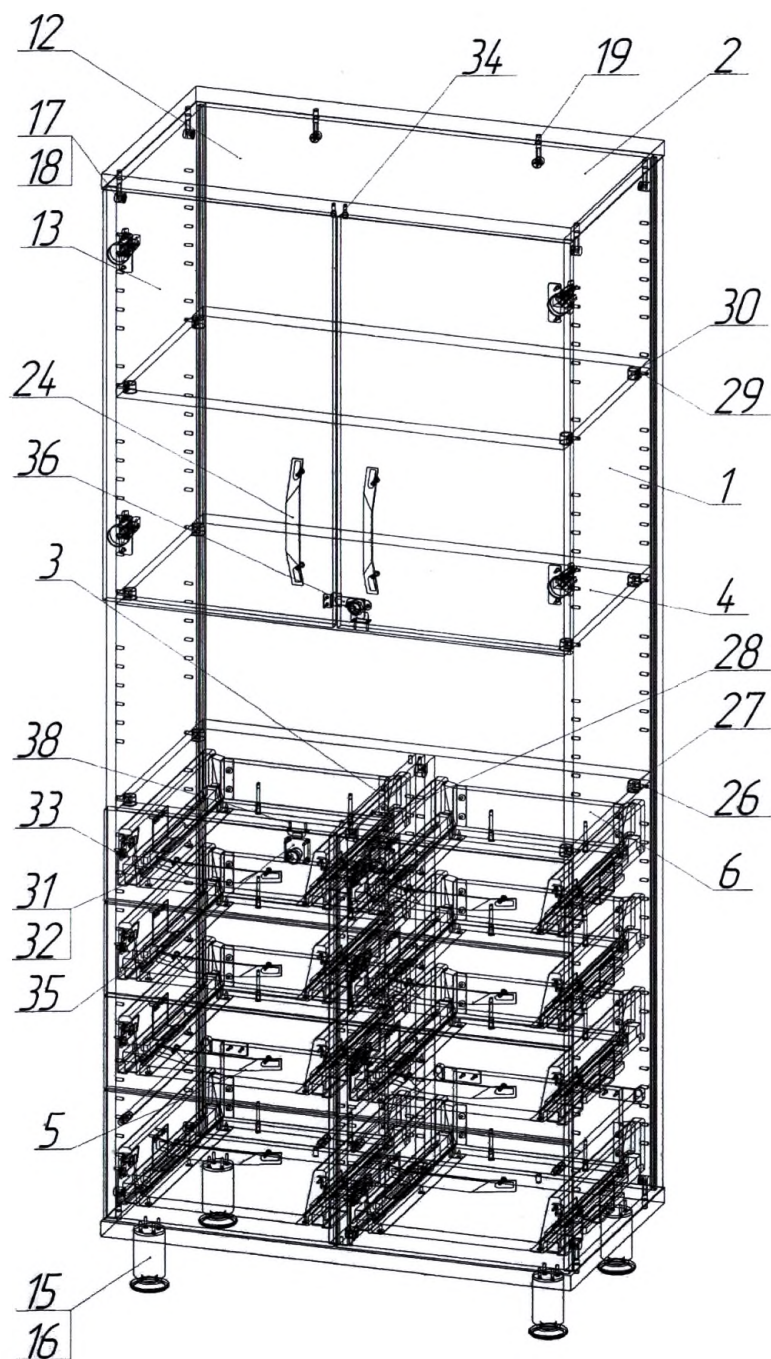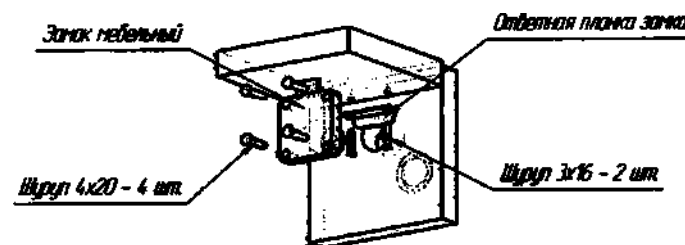

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш-34 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание


Габаритные размеры:

Ширина 870±5 мм, глубина 606±5 мм, высота 1805±5 мм

3. Комплект поставки

Пакет №1

1. Панель боковая левая – 1 шт.
2. Панель боковая правая – 1 шт.
3. Панель задней стенки – 2 шт.
4. Панель дверки – 2 шт.
5. Панель перегородки – 1 шт.
10. Винт конфирмат – 12 шт.
11. Заглушка конфирмата – 12 шт.
12. Шкант мебельный – 12 шт.
13. Петля 4-х шарнирная – 6 комплектов
14. Шуруп 4x16 – 28 шт.
15. Евровинт 6,3x13 – 12 шт.
16. Ручка – скоба – 2 комплекта
17. Опора регулируемая – 4 шт.
18. Гвоздь 2x20 – 90 шт.
19. Полкодержатель – 40 шт.
20. Скоба для крепления задней стенки – 10 шт.
21. Эксцентрик усиленный – 8 шт.
22. Шток усиленного эксцентрика – 4 шт.
23. Шток двусторонний винт – 2 шт.
24. Шток двусторонний гайка – 2 шт.
25. Ключ шестигранный – 1 шт.
26. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
27. Замок – 2 шт.

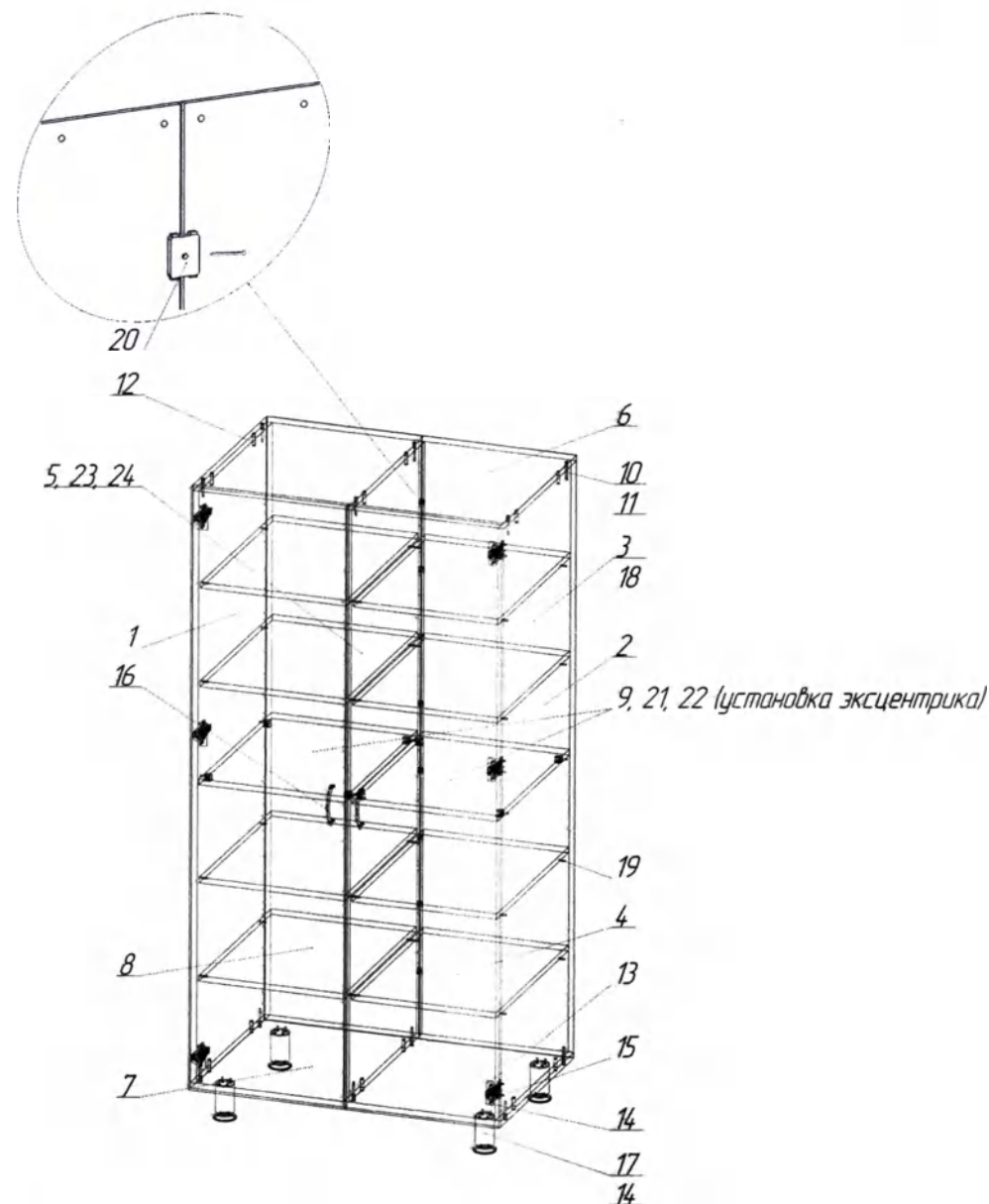


Во избежание появления брака при креплении задних стенок при помощи скоб, необходимо устанавливать их в положении показанном на схеме сборки.

28. Ключ от замка – 4 шт.
29. Шуруп 3x16 – 4 шт.
30. Шуруп 4x20 – 8 шт.

Пакет №2

6. Панель верхняя – 1 шт.
7. Панель нижняя – 1 шт.
8. Панель полки съемной – 8 шт.
9. Панель полки – 2 шт.

Порядок регулировки
4-х шарнирной петли

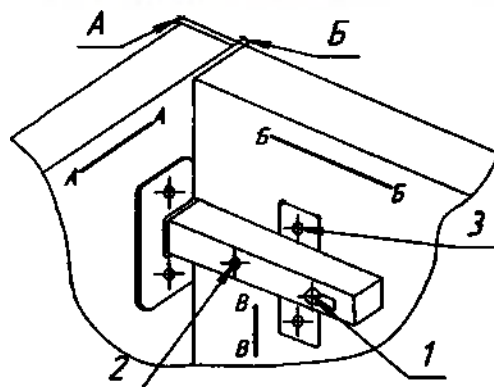

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулирующим винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями – 3 мм. Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

4. Инструкция по сборке.

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Установить шканты (12) в подготовленные глухие отверстия диаметром 8 мм, до упора при помощи молотка (в отверстия диаметром 5 мм шканты не вставлять). По 2 шканта в необлицованные торцы панелей (1, 2, 5).
3. Собрать между собой панель нижнюю (7), панель верхнюю (6), панели боковую правую (2) и панель боковую левую (1) при помощи евровинтов 7x50 (10). Шканты (12) должны войти в подготовленные отверстия на панелях (1, 2, 5). При этом облицованные поверхности панелей должны находиться с одной стороны.
4. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (13) на дверки (4), двумя шурупами 4x16 (14) каждую.
5. Каркас шкафа перевернуть на любую боковую панель. Около облицованного торца боковой панели положить панели дверок (4). Закрепить евровинтами 6,3x13 (15) петли в сборе к боковой панели в подготовленные отверстия.
6. Закрыть дверку и перевернуть шкаф на другую боковую панель и повторить действия с другой дверкой.
7. Установить на панель нижнюю (7) опоры (17) при помощи шурупов 4x16 (14).
8. Ввернуть в подготовленные отверстия на боковых панелях (см. схему) диаметром 5 шток эксцентриков усиленных (22) до упора, т.е. на величину резьбы. На панели перегородки (6) вставить в подготовленные отверстия шток двусторонний гайку (24). С обратной стороны закрутить шток двусторонний винт (23). Вставить эксцентрик усиленный (21) в подготовленные отверстия полки (9) при помощи резинового молотка (см. схему). При помощи отвертки поворачивая почасовой стрелки притянуть полки к боковинам и перегородки.
9. **Осторожно** установить шкаф в рабочее положение. Закрепить на боковых стенках и горизонтальных панелях шкафа задние стенки (3) при помощи гвоздей (18) и скоб для крепления задних стенок (20) через расстояние ≈ 100 мм. Скобы для крепления задних стенок устанавливать в положении как показано на схеме.
10. Отрегулировать положение дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).
11. Прикрепить ручки (16) к дверкам через подготовленные отверстия при помощи винтов идущих в комплекте, при необходимости использовать шайбы.
12. Вставить полкодержатели (19) в подготовленные отверстия и уложить на них полки (8). Закрыть винты заглушками (11).
13. При наличии замков мебельных на фасадах (см. схему).


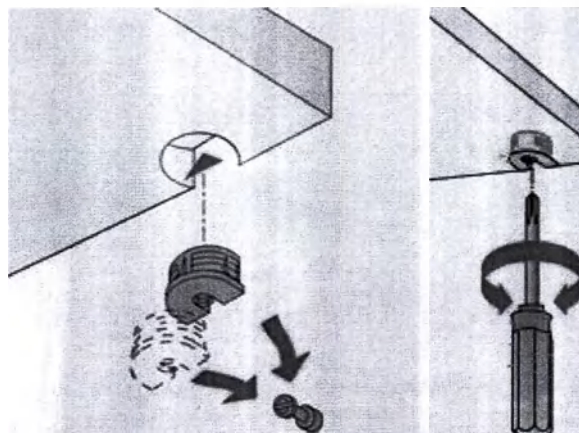


Схема установки замка мебельного при наличии

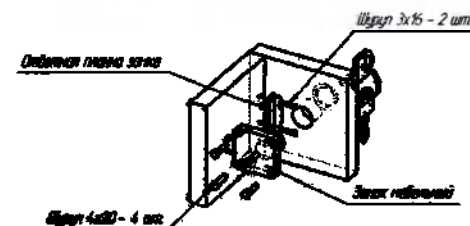

1. Установить в подготовленные отверстия замок мебельный.
2. Закрепить шурупами 4x20 – 4 шт.
3. К боковой стенки прикрепить ответную планку замка при помощи шурупов 3x16 – 2 шт.

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш 2.01 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств, стерильных расходных материалов, медицинских инструментов и прочих изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:


Ширина 900 ± 5 мм, глубина 460 ± 5 мм, высота 1850 ± 5 мм

3. Комплектность поставки

Пакет №1

1	Панель боковая	— 2 шт.
2	Панель горизонтальная	— 2 шт.
3	Панель средняя	— 1 шт.
4	Панель дверки нижней	— 2 шт.
5	Панель дверки верхней в рамке	— 2 шт.
6	Панель полки	— 3 шт.
7	Панель задней стенки	— 2 шт.
8	Винт конфирмат 7x50	— 12 шт.
9	Заглушка винта	— 12 шт.
10	Шкант мебельный	— 12 шт.
11	Петля 4-х шарнирная	— 4 шт.
12	Шуруп 4x16	— 8 шт.
13	Евровинт 6,3x13	— 16 шт.
14	Петля ИТВ для верхних дверок	— 4 шт.
15	Винт 4x10	— 8 шт.
16	Магнитный держатель	— 2 шт.
17	Шуруп 3x16	— 12 шт.
18	Ручка-скоба	— 2 шт.
19	Ручка-полускоба	— 2 шт.
20	Винт 4x25	— 2 шт.
21	Полкодержатель	— 12 шт.
22	Опора регулируемая	— 4 шт.
23	Брус соединительный длинный	— 1 шт.
24	Брус соединительный короткий	— 1 шт.
25	Гвоздь 2x20	— 55 шт.
26	Ключ шестигранный	— 1 шт.
27	Шайба 4	— 4 шт.


Порядок регулировки 4-х шарнирной петли

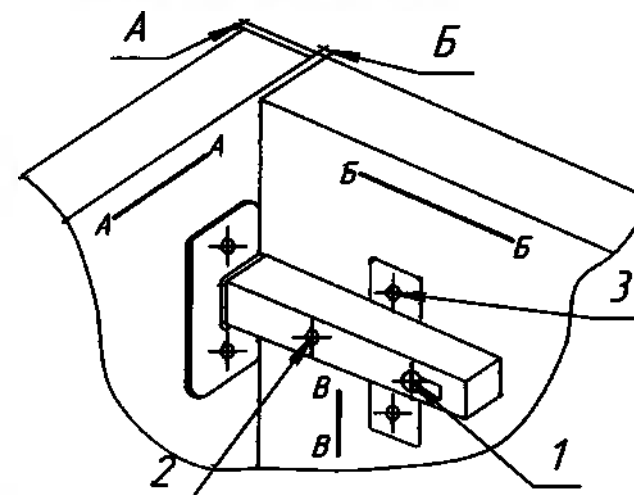

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулирующим винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петель, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверьми – 3 мм.
Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

28	Задвижка	— 4 шт
29	Упор задвижки	— 4 шт
30	Шуруп 4x20	— 20 шт
31	Шуруп 3,5x16	— 4 шт
32	Руководство по эксплуатации	- 1 шт.

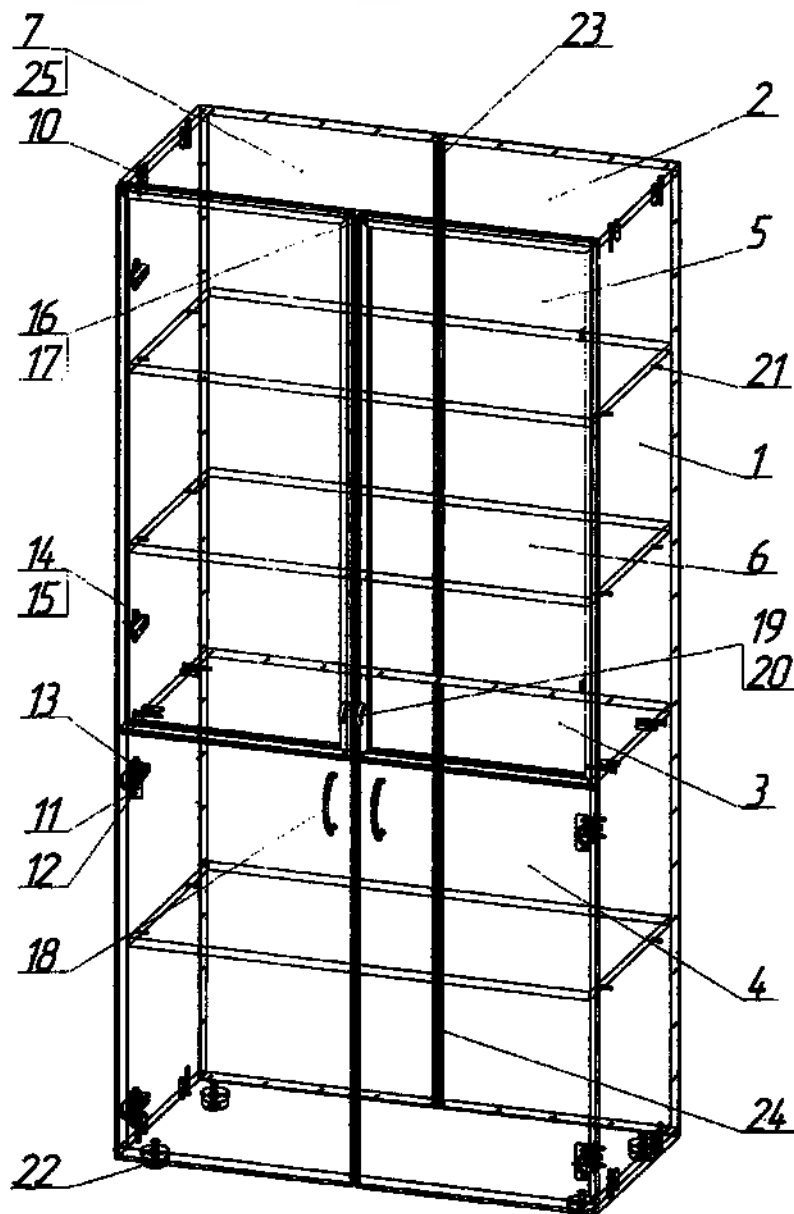

4. Инструкция по сборке.

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Установить шканты (10) в подготовленные глухие отверстия диаметром 8 мм, до упора (в отверстия диаметром 5 мм шканты не вставлять). По 2 шканта в панели (1, 2).
3. Собрать между собой панель среднюю (3) и панели боковые (1) при помощи винтов (8). Шканты (10) должны войти в подготовленные отверстия на панели (3). При этом облицованные поверхности панелей (1, 3) должны находиться с одной стороны.
4. Собрать каркас, закрепив панели боковые (1) через подготовленные отверстия винтами (8) к горизонтальным панелям (2) (верхней и нижней). Шканты (10) должны войти в подготовленные отверстия на панелях (1). При этом облицованные поверхности панелей должны быть с лицевой стороны изделия.
5. Установить и прикрепить 4-х шарнирные петли (11) на дверки (4), двумя шурупами 4x16 (12) каждую.
6. Установить и прикрепить петли ПТВ (14) на дверки (5), двумя винтами (15) каждую, через подготовленные отверстия в рамке.
7. Каркас изделия перевернуть на любую боковую панель. Около облицованного торца боковой панели положить панели дверок (4, 5) и закрепить евровинтами (13) через подготовленные отверстия.
8. Закрыть дверки и перевернуть изделия на другую боковую панель и повторить действия аналогично.
9. Закрепить опоры регулируемые (22) при помощи шурупов (30).
10. **Осторожно** (при помощи 2х сборщиков) установить изделие в рабочее положение. Соединить при помощи планки соединительной длиной (23) сверху и короткой (24) снизу две задние стенки (2) и приколотить гвоздями (25) к боковых (1), горизонтальным панелям (2, 3) через расстояние ≈ 100 мм.
11. Отрегулировать положение дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли (см. схему).
12. Прикрепить ручки-скобы (18) к нижним дверкам (4) через подготовленные отверстия при помощи винтов идущих в комплекте, ручки-полускобы (19) при помощи винтов (20) к верхним дверкам.
13. Прикрепить по месту на панель среднюю (3) и горизонтальную верхнюю панели (2) магнитные держатели (16) шурупами (17).
14. Вставить полкодержатели (21) в подготовленные отверстия и уложить на них полки (6). Закрыть винты заглушками (9).
15. Установить замок.
16. Шкаф готов к работе.

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш 2.02 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств, стерильных расходных материалов, медицинских инструментов и прочих изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:


Ширина 900±5 мм, глубина 460±5 мм, высота 1850±5 мм

3. Комплект поставки

Пакет №1

1.	Шкаф	1 шт.
2.	Панель дверки верхней в рамке	2 шт.
3.	Петля ИТВ для верхних дверок	4 шт.
4.	Винт 4x10	8 шт.
5.	Евровинт 6,3x13	8 шт.
6.	Ручка-полускоба	2 шт.
7.	Винт 4x25	2 шт.
8.	Ручка-скоба	5 шт.
9.	Винт 4x35	8 шт.
10.	Опора регулируемая	4 шт.
11.	Панель полки верхней секции	2 шт.
12.	Панель полки нижней секции	1 шт.
13.	Полкодержатель	12 шт.
14.	Магнитный держатель	2 шт.
15.	Шуруп 3x16	4 шт.
16.	Заглушка евроинта	5 шт.
17.	Заглушка эксцентрика	2 шт.
18.	Замок	2 шт.
19.	Ключ к замку	4 шт.
20.	Шуруп 3x16	4 шт.
21.	Шуруп 4x20	24шт.
22.	Руководство по эксплуатации	1шт.

Порядок регулировки 4-х шарнирной петли

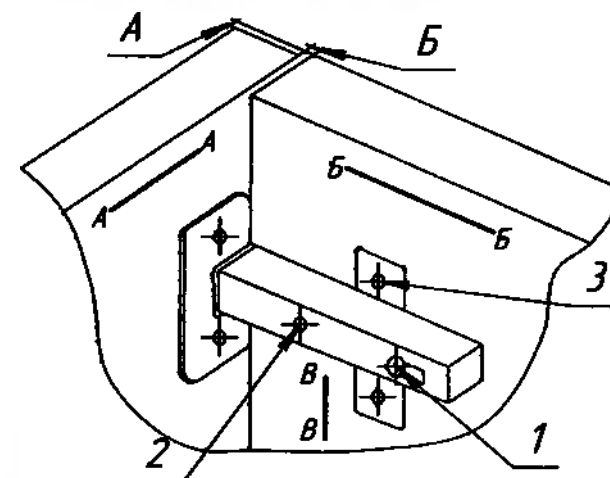


Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверьми – 3 мм.
Во избежание поломки петлей открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Вынуть из верхней секции упакованные дверки. Вынуть полки из верхней и нижней секций.
3. Установить петли на стеклянные дверки в подготовленные отверстия и закрепить при помощи винтов 4x10.
4. Перевернуть изделие в горизонтальное положение. Закрепить опоры шурупами 4x20.
5. Положить изделие на любую боковую сторону, рядом в верхней секции положить дверку с петлями. Закрепить петли на боковой стенке при помощи евровинтов 6,3x13 в подготовленные отверстия. Аналогично сделать с другой дверкой.
6. **Осторожно** (при помощи 2-х сборщиков) установить изделие в вертикальное положение.
7. Прикрепить на среднюю и верхнюю панели, посередине ближе к переднему краю панелей, магнитные держатели шурупами 3x16, **ответные планки магнитных держателей уже установлены на дверках.**
8. Установить на ящиках при помощи винтов 4x35, ручки-скобы. Закрепить ручку-полускобу на верхних дверках через подготовленные отверстия винтами 4x25.
9. Отрегулировать положение дверей согласно схеме.
10. Вставить полкодержатели в подготовленные отверстия и уложить на них полки. Закрыть видимые винты и эксцентрики заглушками.
11. Установить замки (см. схему).
12. Шкаф готов к работе.

Схема установки замка мебельного (при наличии)

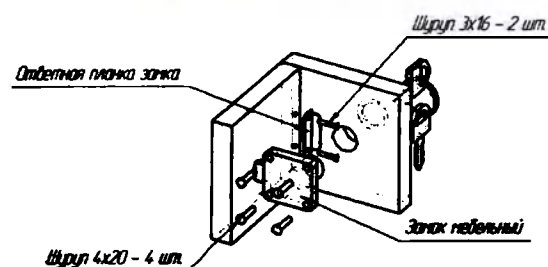

1. Установить в подготовленные отверстия замок мебельный;
2. Закрепить шурупы 4x20 – 4 шт.

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств Ш 2.03 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств, стерильных расходных материалов, медицинских инструментов и прочих изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:


Ширина 900 ± 5 мм, глубина 460 ± 5 мм, высота 1850 ± 5 мм

3. Комплектность поставки

Пакет №1

1. Панель верхняя – 1 шт.
2. Панель правая – 1 шт.
3. Панель левая – 1 шт.
4. Панель нижняя – 1 шт.
5. Панель средняя – 1 шт.
6. Стенка задняя – 2 шт.
7. Полки – 3 шт.
8. Дверь верхняя – 2 шт.
9. Дверь нижняя – 2 шт.
10. Полкодержатели – 12 шт.
11. Винт конфирмат 7x50 – 12 шт.
- 11.1 Заглушка конфирмата – 12 шт.
- 11.2 Ключ конфирмата – 1 шт.
12. Петля 4-х шарнирная – 8 шт.
13. Евровинт 6,3x13 – 16 шт.
14. Шуруп М4х16 – 16 шт.
15. Ручка-скоба – 4 шт.
16. Опора регулируемая – 4 шт.
17. Гвоздь – 55 шт.
18. Шкант мебельный – 12 шт.
19. Брус соединительный длинный – 1 шт.
20. Брус соединительный короткий – 1 шт.
21. Замок - 2 шт.
22. Ключ к замку - 4 шт.
23. Шуруп 3x16 - 12 шт.
24. Шуруп 3,5x16 - 8 шт.


Порядок регулировки 4-х шарнирной петли

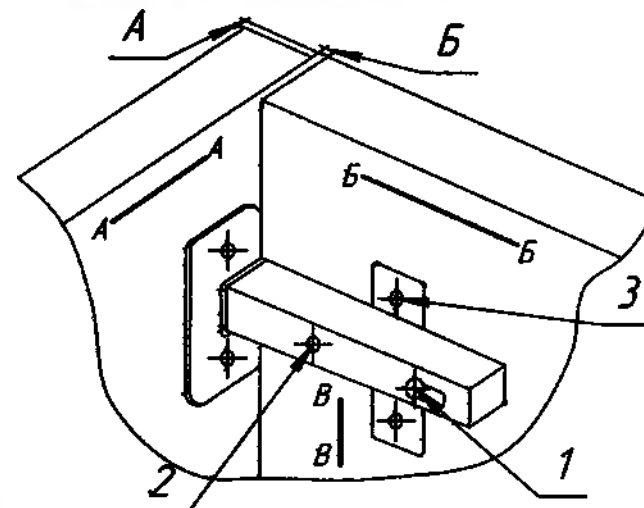

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения двери в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверь перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения двери по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли заворачиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверями – 3 мм.
Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

- 25. Шайба 4 - 8 шт.
- 26. Задвижка - 4 шт
- 27. Упор задвижки - 4 шт
- 28. Шуруп 4x20 - 24 шт.
- 29. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

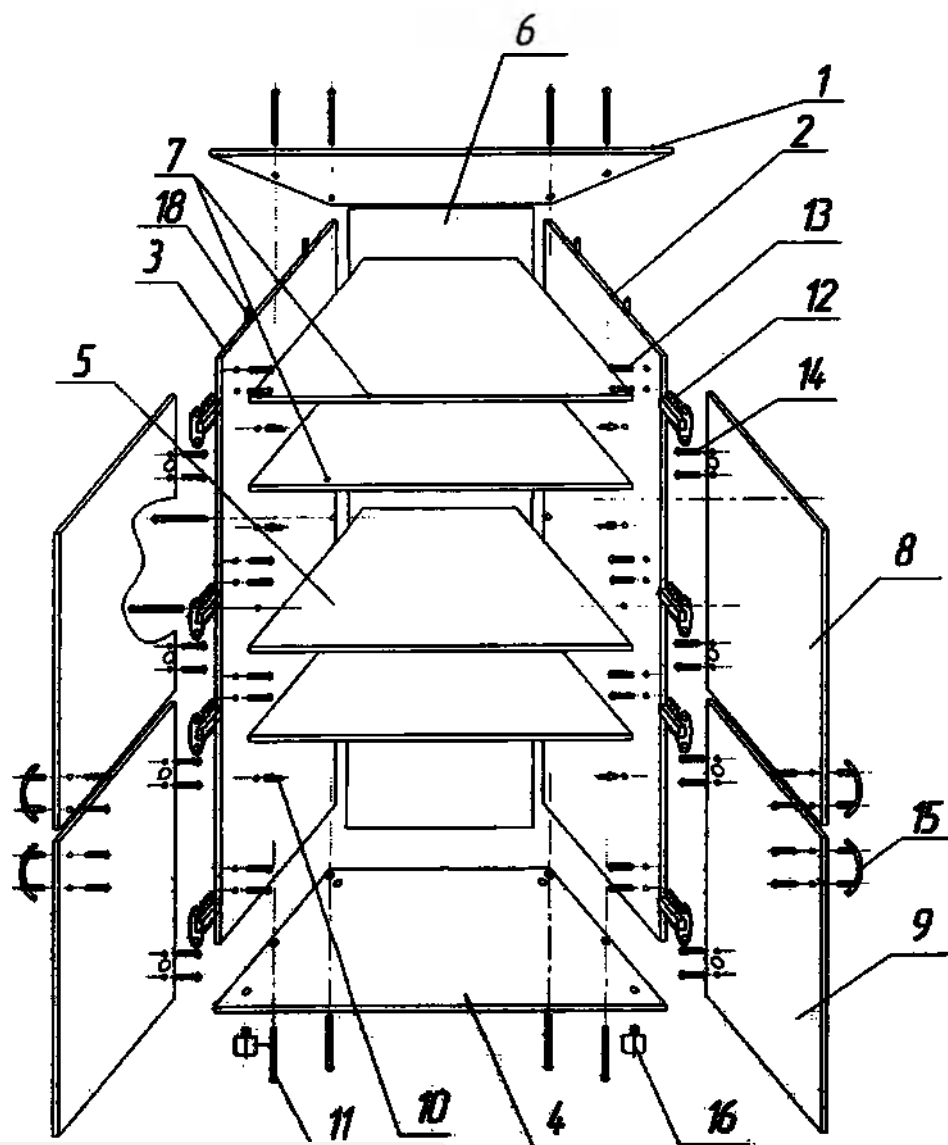

4. Инструкция по сборке

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Установить шканты (18) в подготовленные глухие отверстия диаметром 8 мм, до упора при помощи молотка (**в отверстия диаметром 5 мм шканты не вставлять**). По 2 шканта в необлицованные торцы панелей (2,3,5).
3. Собрать между собой панель среднюю (5) и панели левую (3) и левую (2) при помощи винтов (11). Шканты (18) должны войти в подготовленные отверстия на панелях (2,3). При этом облицованные поверхности панелей должны находиться с одной стороны.
4. Собрать каркас изделия, закрепив боковые стенки (2,3) через подготовленные отверстия винтами 7x50 (11) к панелям – верхней (1), нижней (4). Шканты (18) должны войти в подготовленные отверстия на панелях (1,4). При этом облицованные поверхности панелей должны находиться с лицевой стороны изделия.
5. Установить и прикрепить 4х-шарнирные петли (12) на дверки (8,9), двумя шурупами М4х16 (14) каждую в подготовленные отверстия..
6. Каркас изделия перевернуть на любую боковую панель. Около
7. облицованного торца боковой панели положить панели дверок (8,9), зазор между ними 2-3 мм. Закрепить еврвинт 6,3x13 (13) петли в сборе к боковой панели.
8. Закрыть дверки и перевернуть изделие на другую боковую панель и повторить действия с другими дверками.
9. Установить опоры регулируемые (16) при помощи шурупов (28).
10. **Осторожно** (при помощи 2х сборщиков) установить изделие в рабочее положение. Соединить при помощи планки соединительной длиной (19) сверху и короткой (20) снизу две задние стенки, на боковых и горизонтальных панелях (6) приколотить гвоздями (17) через расстояние 100мм.
11. Отрегулировать положение дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли.
12. Прикрепить ручки (15) к нижним дверкам через подготовленные отверстия при помощи винтов идущих в комплекте.
13. Вставить полкодержатели (10) в подготовленные отверстия и уложить на них полки (7). Закрыть винты заглушками (11.1).
14. Установить замки.
15. Шкаф готов к работе.

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств МКП 013 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание


Габаритные размеры:

Ширина 900±5 мм, глубина 430±5 мм, высота 1705±10 мм

2. Комплект поставки

Пакет №1

1. Боковая стенка	- 2 шт.
2. Задняя стенка	- 2 шт.
3. Полка	- 4 шт.
4. Панель горизонтальная	- 2 шт.
5. Панель средняя	- 1 шт.
6. Дверка	- 2 шт.
7. Петля 4-х шарнирная	- 4 шт.
8. Ручка - скоба	- 2 шт.
9. Винт конфирмат 7x50	- 14 шт.
10. Заглушка винта	- 14 шт.
11. Полкодержатель	- 16 шт.
12. Шуруп 4x16	- 8 шт.
13. Евровинт 6,3x13	- 8 шт.
14. Опора регулируемая	- 4 шт.
15. Брус соедин. длинный	- 1 шт.
16. Брус соедин. короткий	- 1 шт.
17. Гвоздь 2x20	- 60 шт.
18. Ключ шестигранный	- 1 шт.
19. Шкант мебельный	- 12 шт.
20. Замок	- 1 шт.
21. Ключ к замку	- 2 шт.
22. Шуруп 3x16	- 6 шт.

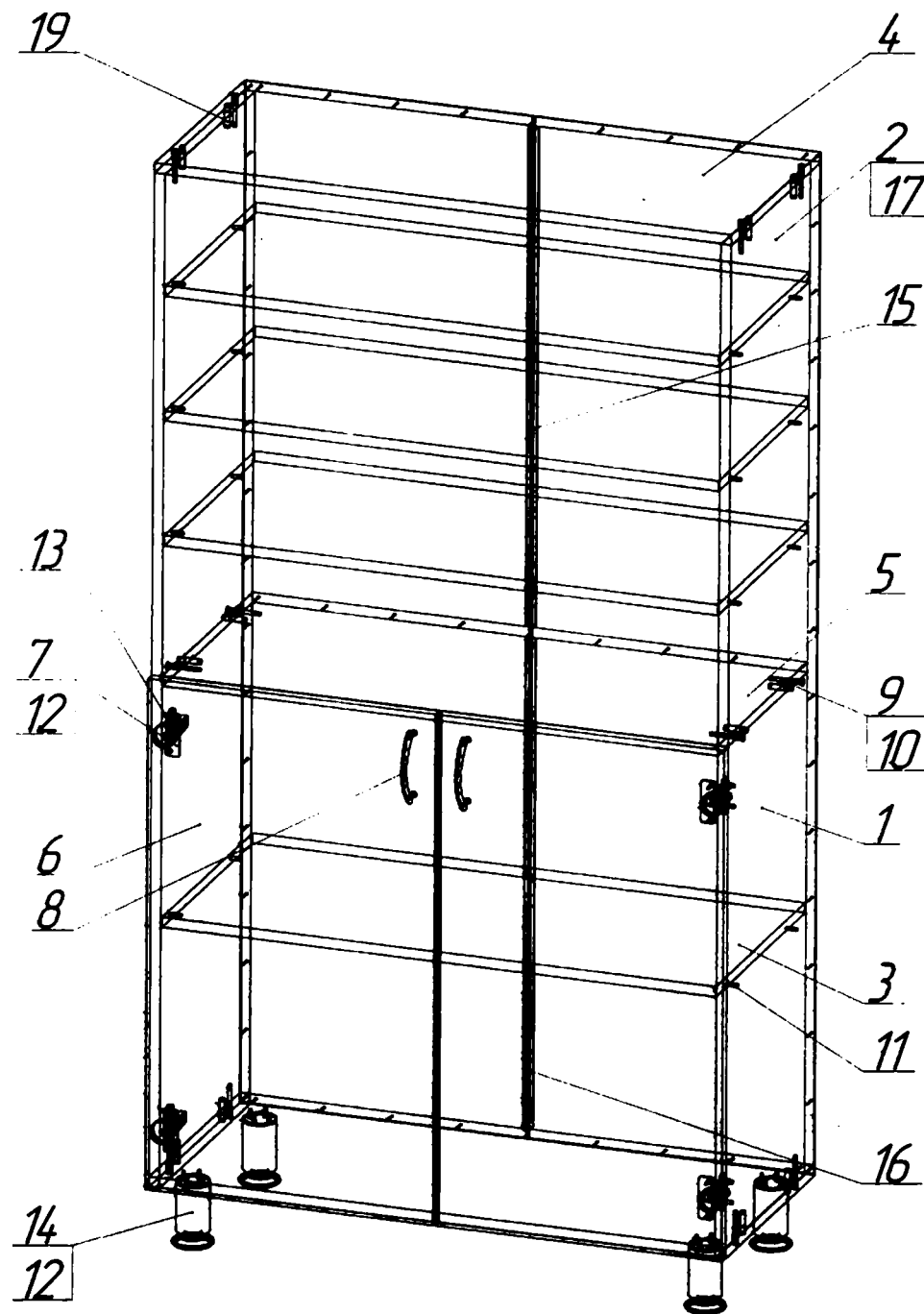


- | | |
|---------------------------------|---------|
| 23. Шуруп 3,5x16 | - 4 шт. |
| 24. Шайба 4 | - 8 шт. |
| 25. Задвижка | - 2 шт. |
| 26. Упор задвижки | - 2 шт. |
| 27. Шуруп 4x20 | - 4 шт. |
| 28. Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |

3. Инструкция по сборке.

- 3.1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
- 3.2. Установить шканты (19) в подготовленные глухие отверстия диаметром 8 мм, до упора при помощи молотка (**в отверстия диаметром 5 мм шканты не вставлять**). По 2 шканта в необлицованные торцы горизонтальных панелей (4).
- 3.3. Собрать каркас изделия, закрепив боковые стенки (1) через подготовленные отверстия винтами 7x50 (9) к горизонтальным панелям – верхней, нижней и средней (4). Шканты (19) должны войти в подготовленные отверстия на панелях боковых. При этом облицованные поверхности панелей должны находиться с лицевой стороны изделия.
- 3.4. Установить на панель горизонтальную нижнюю (4) опоры (14) при помощи шурупов 4x16 (12).
- 3.6. Установить и прикрепить шарнирные петли (7) на дверки, двумя шурупами 4x16 (12) каждую в подготовленные отверстия.
- 3.7. Каркас изделия перевернуть на любую боковую панель. Около облицованного торца боковой панели положить панель дверки (6). Закрепить евровинтами 6,3x13 (13) петли в сборе к боковой панели.
- 3.8. Закрыть дверку и перевернуть изделие на другую боковую панель и повторить действия с другой дверкой.
- 3.9. **Осторожно** (при помощи 2-х сборщиков) установить изделие в рабочее положение. Соединить 2 задние стенки при помощи брусев соединительных (15, 16) (длинный брус для верхней секции) и закрепить на боковых стенках и горизонтальных панелях гвоздями через расстояние 100 мм.
- 3.10. Отрегулировать положение дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли.
- 3.11. Прикрепить ручки (8) к дверкам через подготовленные отверстия при помощи винтов.


Порядок регулировки 4-х шарнирной петли

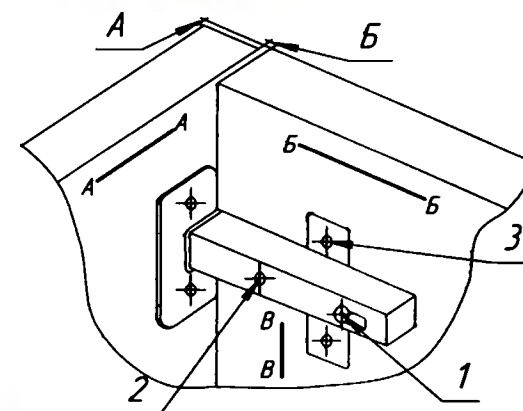

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
 2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
 3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
 4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли заворачиваются до отказа.
 5. Предусмотренный зазор между дверьми – 3 мм.
- Во избежание поломки петлей открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

Схема установки замка не является типичной

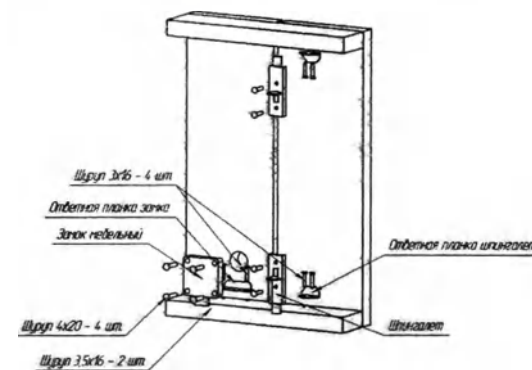

1. Установить в подготовленные отверстия замок невидимый;
2. Закрепить шурупами 4x20 – 4 шт.
3. Прикрепить ответную планку замка и шпингалета при помощи шурупов 3x16 – 4 шт.
4. Прикрепить шпингалет при помощи шурупа 3,5x16 – 2 шт.

- 3.12. Вставить полкодержатели (11) в подготовленные отверстия боковых стенок и уложить на них полки (3).
- 3.13. Закрыть винты заглушками (10).
- 3.14. Установить замок (см. схему).
- 3.15. Шкаф готов к работе.

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств МКП 013/01 (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Габаритные размеры:

Ширина 900±5 мм, глубина 430±5 мм, высота 1705±10 мм

2. Комплект поставки

Пакет №1

1. Боковая стенка	- 2 шт.
2. Задняя стенка	- 2 шт.
3. Гориз. панель	- 2 шт.
4. Панель средняя	- 1 шт.
5. Дверка ЛДСП	- 2 шт.
6. Полка ЛДСП	- 1 шт.
7. Винт конфирмат 7x50	-14 шт.
8. Заглушка винта	- 14 шт.
9. Петля правая для стеклянной дверки	- 2 шт.
10. Петля левая для стеклянной дверки	- 2 шт.
11. Магн. держатель	- 2 шт.
12. Ручка для стеклянной дверки	- 2 шт.
13. Опора регулируемая	- 4 шт.
14. Петля 4-х шарнирная	- 4 шт.
15. Полкодержатель	- 16 шт.
16. Ручка - скоба	- 2 шт.
17. Гвоздь 2x20	- 60 шт.
18. Шуруп 4x16	- 8 шт.
19. Евровинт 6,3x13	- 8 шт.
20. Шуруп 3x16	- 10 шт.
21. Брус соедин. короткий	- 1 шт.
22. Брус соедин. длинный	- 1 шт.
23. Ключ шестигранный	- 1 шт.
24. Шкант мебельный	- 12 шт.
25. Замок	- 1 шт.
26. Ключ к замку	- 2 шт.
27. Ключ шестигранный	- 1 шт.
	- 4 шт.


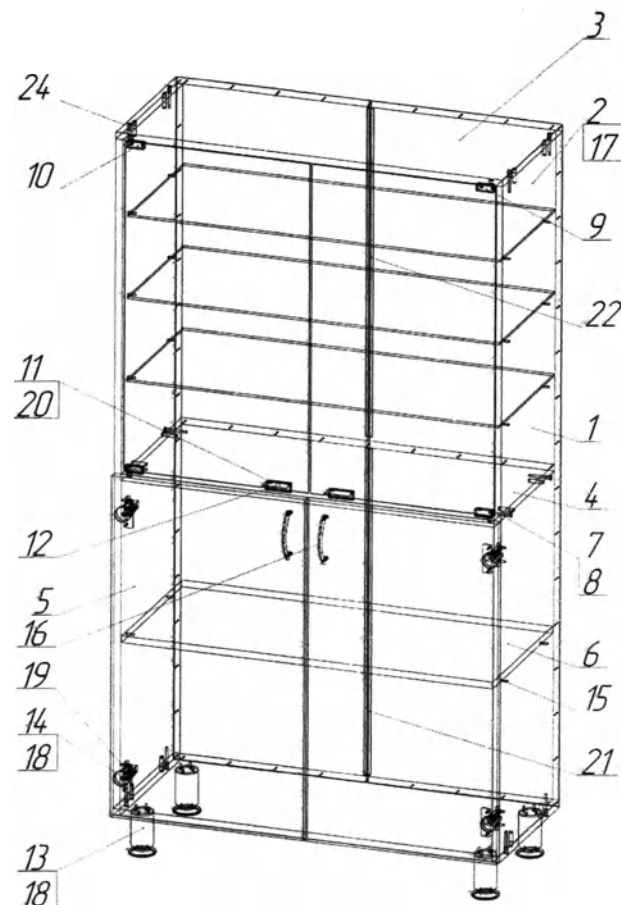


Схема установки замка мебельного (при наличии)

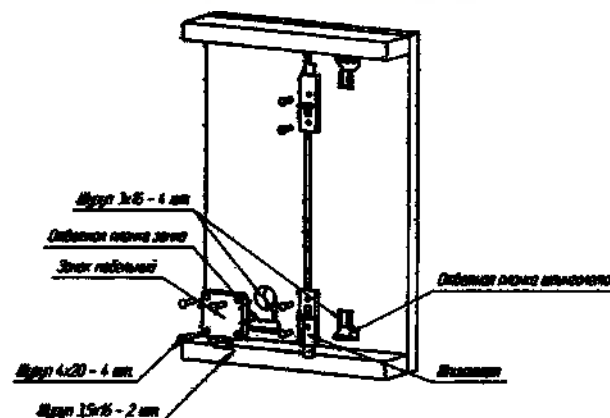

1. Установить в подготовленные отверстия замок мебельный;
2. Закрепить шурупы 4x20 - 4 шт.
3. Закрепить отдельную планку замка и шпингалета при помощи шурупов 3x16 - 4 шт.
4. Прикрепить шпингалет при помощи шурупов 3,5x16 - 2 шт.

29. Задвижка	- 2 шт.
30. Упор задвижки	- 2 шт.
31. Шуруп 4x20	- 4 шт.
32. Руководство по эксплуатации	- 1 шт.


Пакет №2

33. Полка стекло	- 3 шт.
34. Дверка стекло	- 2 шт.

3. Инструкция по сборке.

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Установить шканты (24) в подготовленные глухие отверстия диаметром 8 мм, до упора при помощи молотка (**в отверстия диаметром 5 мм шканты не вставлять**). По 2 шканта в необлицованные торцы горизонтальных панелей (3).
3. Собрать каркас изделия, закрепив боковые стенки (1) через подготовленные отверстия евровинтами 7x50 (7) к гориз. панелям верхней, нижней и средней (4). Шканты (24) должны войти в подготовленные отверстия на панелях боковых. При этом облицованные поверхности панелей должны находиться с лицевой стороны изделия.
4. Установить на панель горизонтальную нижнюю (3) опоры (13) при помощи шурупов 4x16 (18).
5. Установить и прикрепить шарнирные петли (14) на дверки, двумя шурупами 4x16 (18) каждую.
6. Каркас изделия перевернуть на любую боковую панель. Около облицованного боковой панели положить панель дверки ЛДСП (6). Закрепить шурупами Евровинт 6,3x13 (19) петли в сборе к боковой панели.
7. Закрыть дверку и перевернуть изделие на другую боковую панель и повторить действия с другой дверкой.
8. Установить изделие в рабочее положение. Соединить 2 задние стенки при помощи бруса соедин. (21; 22) (длинный брус для верхней секции) и закрепить на боковых стенках и гориз. панелях гвоздями через расстояние 100 мм.
9. Прикрепить ручки к дверкам ЛДСП (16) через подготовленные отверстия при помощи винтов.
10. Вставить в отверстия верхней и средней панелей пластмассовые втулки под оси петель стеклянной дверки.
11. Установить петли (9; 10) стеклянной дверки во втулки, при этом крепежные винты должны быть внутри.

Порядок регулировки
4-х шарнирной петли

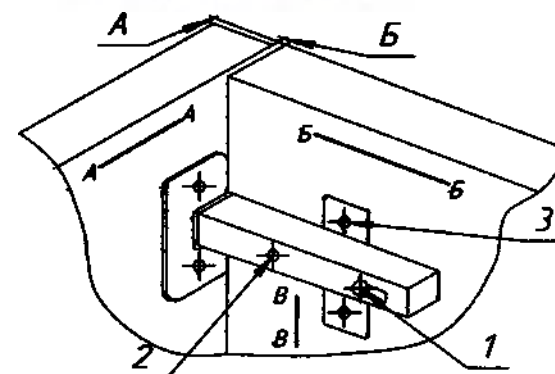

Регулировка петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулирующим винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверью - 3 мм. Во избежание поломки петлей открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

12. Вложить в петли по два узких пластиковых вкладыша. Со стороны винтов вложить металлический вкладыш.
13. Вставить стеклянные дверки (34) в петли между пластиковыми вкладышами. Передвигая стекло в петлях, отрегулировать зазор между дверкой и каркасом. Для надежной фиксации затянуть крепежные винты.
15. Вложить широкий пластиковый вкладыш в ручку стеклянной дверки.
16. Надеть ручку (12) на нижнюю кромку стеклянной дверки.
17. Установить на среднюю панель магнитный держатель (11) и закрепить его шурупами 3x16 (20).
18. Вставить полкодержатели (15) в подготовленные отверстия и уложить на них полки (33).
19. Закрыть винты заглушками.
20. Установить замок (см. схему).
21. Шкаф готов к работе.

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств МКП 013/02 (в дальнейшем - изделие) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание


Габаритные размеры:

Ширина 900±5 мм, глубина 430±5 мм, высота 1705±10 мм

2. Комплект поставки


Пакет №1

1. Боковая стенка	- 2 шт.
2. Панель горизонтальная	- 2 шт.
3. Полка ЛДСП	- 4 шт.
4. Панель средняя	- 1 шт.
5. Задняя стенка	- 2 шт.
6. Дверка нижняя ЛДСП	- 2 шт.
7. Дверка верхняя ЛДСП	- 2 шт.
8. Винт конфирмат 7x50	- 14 шт.
9. Заглушка винта	- 14 шт.
10. Ручка-скоба	- 4 шт.
11. Полкодержатель	- 16 шт.
12. Опора регулируемая	- 4 шт.
13. Петля 4-х шарнирная	- 8 шт.
14. Евровинт 6,3x13	- 16 шт.
15. Шуруп 4x16	- 16 шт.
16. Гвоздь 2x20	- 60 шт.
17. Брус соединительный	- 2 шт.
18. Ключ шестигранный	- 1 шт.
19. Шкант мебельный	- 12 шт.
20. Замок	- 2 шт.
21. Ключ к замку	- 4 шт.
22. Шуруп 3x16	- 12 шт.

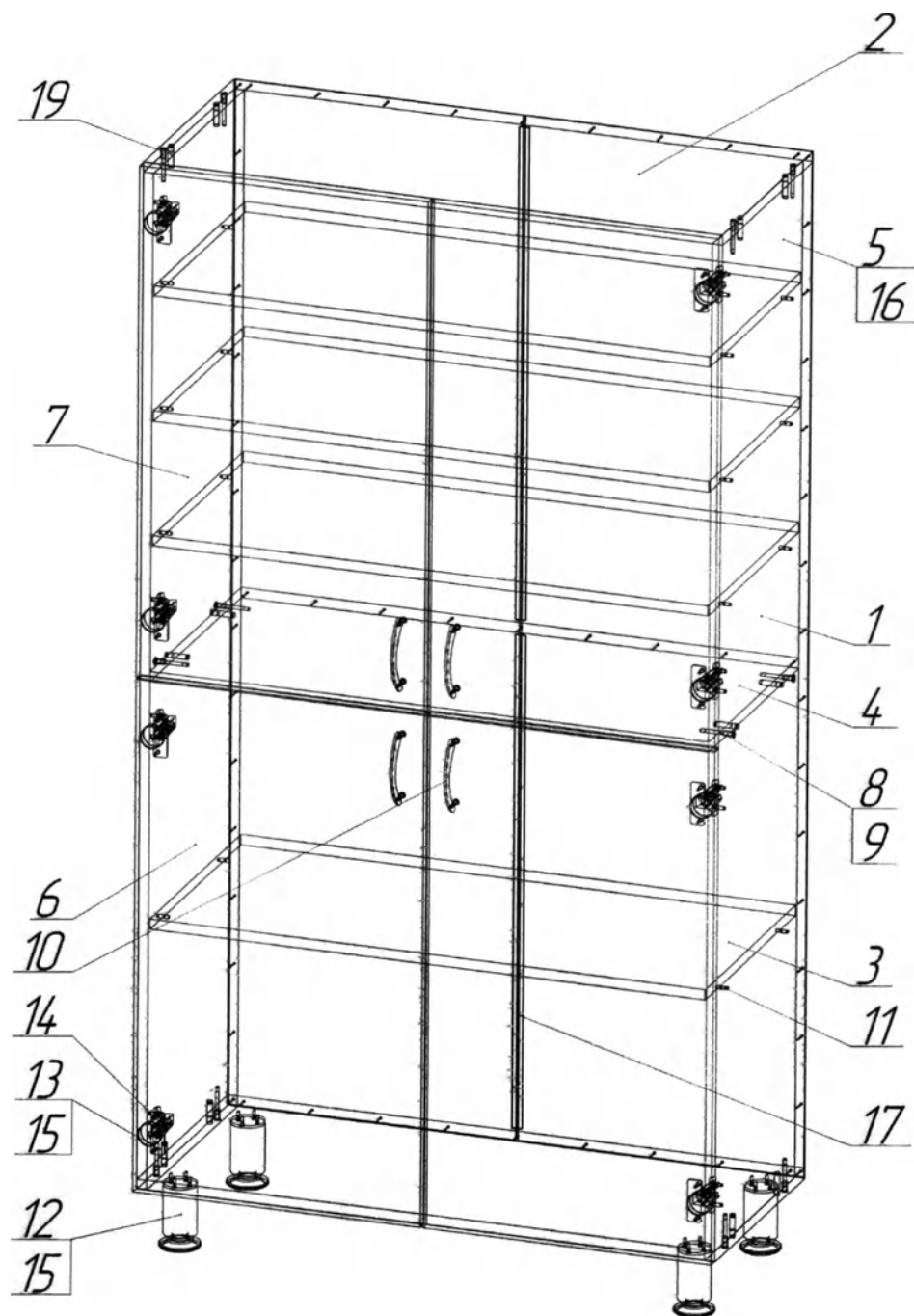

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 23. Шуруп 4x20 | - 8 шт. |
| 24. Шуруп 3,5x16 | - 8 шт. |
| 25. Задвижка | - 4 шт. |
| 26. Упор задвижки | - 4 шт. |
| 27. Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |

Схема установки замка мебельного (при наличии)

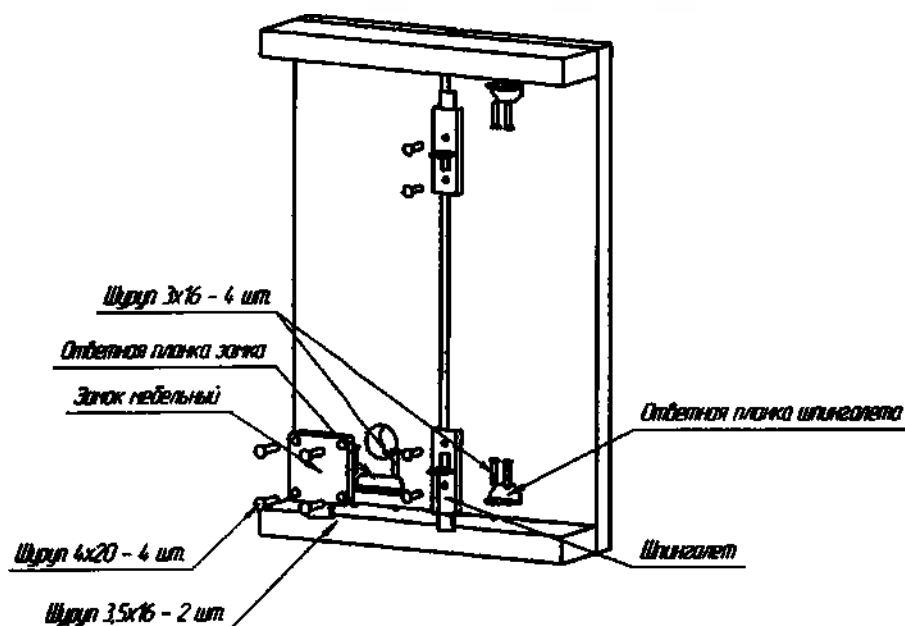


1. Установить в подготовленные отверстия замок мебельный;
2. Закрепить шурупы 4x20 - 4 шт.;
3. Прикрепить отделную планку замка и шпингалета при помощи шурупов 3x16 - 4 шт.;
4. Прикрепить шпингалет при помощи шурупов 3,5x16 - 2 шт.

4. Инструкция по сборке.

1. Распаковать шкаф и комплектующие. Сборку проводить на ровной поверхности.
2. Установить шканты (19) в подготовленные глухие отверстия диаметром 8 мм, до упора при помощи молотка (**в отверстия диаметром 5 мм шканты не вставлять**). По 2 шканта в необлицованные торцы горизонтальных панелей (2).
3. Собрать каркас изделия закрепив боковые стенки (1) через подготовленные отверстия винтами 7x50 (8) к гориз. панелям (2) верхней, нижней и средней. Шканты (19) должны войти в подготовленные отверстия на панелях боковых. При этом облицованные поверхности панелей должны находиться с лицевой стороны изделия.
4. Установить на панель горизонтальную нижнюю (2) опоры (12) при помощи шурупов 4x16 (15).
5. Установить и прикрепить шарнирные петли (13) на дверки, двумя шурупами 4x16 (15) каждую.
6. Каркас изделия перевернуть на любую боковую панель. Около торца боковой панели положить панель дверки. Верхнюю дверку выравнивать по верхней горизонтальной панели. Между верхней дверкой и нижней предусмотреть зазор около 5 мм. Закрепить евровинт 6,3x13 (13) петли в сборе к боковой панели.
7. Закрыть дверки и перевернуть изделие на другую боковую панель и повторить действия с другими дверками.
8. **Осторожно** (при помощи 2-х сборщиков) установить изделие в рабочее положение. Соединить 2 задние стенки при помощи бруса соединительный (17) и закрепить на боковых стенках и горизонтальных панелях гвоздями через расстояние 100 мм.
9. Отрегулировать положение дверок и величину зазоров с помощью регулировочных винтов шарнирной петли.
10. Прикрепить винтами ручки (10) к дверкам через подготовленные отверстия.
11. Вставить полкодержатели (11) в подготовленные отверстия и уложить на них полки (3).
12. Закрыть винты заглушками (9).
13. Установить замки (см. схему).
14. Шкаф готов к работе.

Порядок регулировки 4-х шарнирной петли

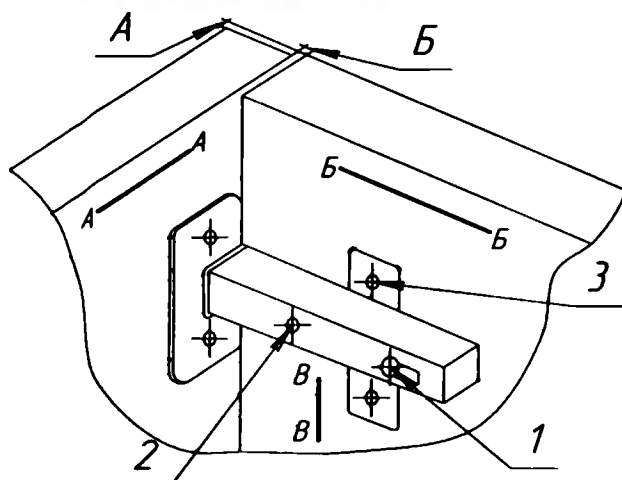

Регулирование петель осуществляется с помощью винтов 1 и 2 по двум координатам, указанным стрелками А-А и Б-Б и с помощью шурупов планки петли по координатам, указанным стрелками В-В.

1. Ослабляется винт 1, что дает возможность перемещения дверки в направлениях по стрелкам Б-Б, изменяя размер "Б".
2. Регулировочным винтом 2 дверка перемещается по стрелкам А-А, изменяя размер "А".
3. Ослабив шурупы 3 планки петли, получаем возможность перемещения дверки по направлению стрелок В-В.
4. После регулировки винт 1 и шурупы планки петли закручиваются до отказа.
5. Предусмотренный зазор между дверьми – 3 мм.
Во избежание поломки петель открывать и закрывать двери следует плавно, открывая не более чем на 90° к плоскости шкафа.

1. Назначение

Шкаф для хранения лекарственных средств в исполнениях: №6, №8, №8 с/н/с, №8 п/н/с, №18, №18 с/н/с, №22, №22 с/н/с, №28, №28 с/н/с, №28 п/н/с (в дальнейшем шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных средств (кроме наркотических и психотропных лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, находящихся под контролем в соответствии с международными правовыми нормами), стерильных расходных материалов в барьерной упаковке, медицинских инструментов в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских центрах и больницах.

2. Описание

Исполнение	Внешний вид	Описание
№6		Металлический шкаф. Левое отделение - дверка из HPL-пластика, оснащено одной полкой; правое отделение - фасады из HPL-пластика, оснащено тремя выдвижными ящиками. Верхняя столешница из HPL-пластика. Установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 900±5/Глубина 600±5/Высота 865±10
№8		Металлический шкаф. Левое и правое отделение - дверка из металла с полимерно-порошковым покрытием, оснащено одной полкой; среднее отделение - фасады из металла с полимерно-порошковым покрытием, оснащено тремя выдвижными ящиками. Верхняя столешница из HPL-пластика. Установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 1350±5/Глубина 600±5/Высота 865±10
№8 с/н/с		Металлический шкаф. Левое и правое отделение - дверка из металла с полимерно-порошковым покрытием, оснащено одной полкой; среднее отделение - фасады из металла с полимерно-порошковым покрытием, оснащено тремя выдвижными ящиками. Верхняя столешница из нержавеющей стали. Установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 1350±5/Глубина 600±5/Высота 890±10
№8 п/н/с		Шкаф полностью из нержавеющей стали. Левое и правое отделение - оснащено одной полкой и дверкой; среднее отделение - оснащено тремя выдвижными ящиками. Верхняя столешница из нержавеющей стали. Установлен на регулируемые опоры.

Исполнение	Внешний вид	Описание
№18		Габаритные размеры: Ширина 1350±5/Глубина 600±5/Высота 890±10 Металлический шкаф. Левое и правое отделение - дверка из HPL-пластика, оснащено одной полкой; среднее отделение - фасады из HPL-пластика, оснащено тремя выдвижными ящиками. Верхняя столешница из HPL-пластика. Установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 1350±5/Глубина 600±5/Высота 865±10
№18 с/н/с		Металлический шкаф. Левое и правое отделение - дверка из HPL-пластика, оснащено одной полкой; среднее отделение - фасады из HPL-пластика, оснащено тремя выдвижными ящиками. Верхняя столешница из нержавеющей стали. Установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 1350±5/Глубина 600±5/Высота 890±10
№22		Металлический шкаф. Левое отделение - дверка из металла с полимерно-порошковым покрытием, оснащено одной полкой; правое отделение - фасады из металла с полимерно-порошковым покрытием, оснащено тремя выдвижными ящиками. Верхняя столешница из HPL-пластика. Установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 900±5/Глубина 600±5/Высота 865±10
№22 с/н/с		Металлический шкаф. Левое отделение - дверка из металла с полимерно-порошковым покрытием, оснащено одной полкой; правое отделение - фасады из металла с полимерно-порошковым покрытием, оснащено тремя выдвижными ящиками. Верхняя столешница из нержавеющей стали. Установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 900±5/Глубина 600±5/Высота 890±10

Исполнение	Внешний вид	Описание
№28		Металлический шкаф. Левое и правое отделение - дверка из металла с полимерно-порошковым покрытием, оснащено одной полкой; Верхняя столешница из HPL-пластика. Установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 900±5/Глубина 600±5/Высота 865±10
№28 с/н/с		Металлический шкаф. Левое и правое отделение - дверка из металла с полимерно-порошковым покрытием, оснащено одной полкой; Верхняя столешница из нержавеющей стали. Установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 900±5/Глубина 600±5/Высота 890±10
№28 п/н/с		Шкаф полностью из нержавеющей стали. Левое и правое отделение - оснащено одной полкой и дверкой. Верхняя столешница из нержавеющей стали. Установлен на регулируемые опоры. Габаритные размеры: Ширина 900±5/Глубина 600±5/Высота 890±10

3. Комплект поставки

Шкаф для хранения лекарственных средств №6:

Пакет №1: модуль ТЗ.4501/ПЛ – 1 шт.,
Пакет №2: модуль ТЗ.4503/П - 1 шт.,
Пакет №3: столешница 40.2000/900 - 1 шт., шуруп 4,2х9,5 - 8 шт.,
руководство по эксплуатации - 1 шт.

Шкаф для хранения лекарственных средств №8:

Пакет №1: модуль ТЗ.4501/МЛ – 1 шт.,
Пакет №2: модуль ТЗ.4503/М - 1 шт.,
Пакет №3: модуль ТЗ.4501/МП - 1 шт.,
Пакет №4: столешница 40.2000/1350 - 1 шт., шуруп 4,2х9,5 - 12 шт.,
руководство по эксплуатации - 1 шт.

Шкаф для хранения лекарственных средств №8 с/н/с:

Пакет №1: модуль ТЗ.4501/МЛ – 1 шт.,
Пакет №2: модуль ТЗ.4503/М - 1 шт.,
Пакет №3: модуль ТЗ.4501/МП - 1 шт.,
Пакет №4: столешница 40.3000/1350 - 1 шт., винт 4х10 - 12 шт.,
руководство по эксплуатации - 1 шт.

Шкаф для хранения лекарственных средств №8 п/н/с:

Пакет №1: модуль ТЗ.4501/НЛ – 1 шт.,
Пакет №2: модуль ТЗ.4503/Н - 1 шт.,
Пакет №3: модуль ТЗ.4501/НП - 1 шт.,
Пакет №4: столешница 40.3000/1350 - 1 шт., винт 4х10 - 12 шт.,
руководство по эксплуатации - 1 шт.

Шкаф для хранения лекарственных средств №18:

Пакет №1: модуль ТЗ.4501/ПЛ – 1 шт.,
Пакет №2: модуль ТЗ.4503/П - 1 шт.,
Пакет №3: модуль ТЗ.4501/ПП - 1 шт.,
Пакет №4: столешница 40.2000/1350 - 1 шт., шуруп 4,2х9,5 - 12 шт.,
руководство по эксплуатации - 1 шт.

Шкаф для хранения лекарственных средств №18 с/н/с:

Пакет №1: модуль ТЗ.4501/ПЛ – 1 шт.,
Пакет №2: модуль ТЗ.4503/П - 1 шт.,
Пакет №3: модуль ТЗ.4501/ПП - 1 шт.,
Пакет №4: столешница 40.3000/1350 - 1 шт., винт 4х10 - 12 шт.,
руководство по эксплуатации - 1 шт.

Шкаф для хранения лекарственных средств №22:

Пакет №1: модуль ТЗ.4501/МЛ – 1 шт.,
Пакет №2: модуль ТЗ.4503/М - 1 шт.,
Пакет №3: столешница 40.2000/900 - 1 шт., шуруп 4,2х9,5 - 8 шт.,
руководство по эксплуатации - 1 шт.

Шкаф для хранения лекарственных средств №22 с/н/с:

Пакет №1: модуль ТЗ.4501/МЛ – 1 шт.,
Пакет №2: модуль ТЗ.4503/М - 1 шт.,
Пакет №3: столешница 40.3000/900 - 1 шт., винт 4х10 - 8 шт.,
руководство по эксплуатации - 1 шт.

Шкаф для хранения лекарственных средств №28

Пакет №1: модуль ТЗ.4501/МЛ – 1 шт.,

Пакет №2: модуль ТЗ.4501/МП - 1 шт.,

Пакет №3: столешница 40.2000/900 - 1 шт., шуруп 4,2х9,5 - 8 шт.,
руководство по эксплуатации - 1 шт.

Шкаф для хранения лекарственных средств №28 с/н/с:

Пакет №1: модуль ТЗ.4501/МЛ – 1 шт.,

Пакет №2: модуль ТЗ.4501/МП - 1 шт.,

Пакет №3: столешница 40.3000/900 - 1 шт., винт 4х10 - 8 шт., руководство по
эксплуатации - 1 шт.

Шкаф для хранения лекарственных средств №28 п/н/с:

Пакет №1: модуль ТЗ.4501/НЛ – 1 шт.,

Пакет №2: модуль ТЗ.4501/НП - 1 шт.,

Пакет №3: столешница 40.3000/900 - 1 шт., винт 4х10 - 8 шт., руководство по
эксплуатации - 1 шт.

4. Инструкция по сборке

- 4.1. Распаковать шкаф и комплектующие.
- 4.2. Установить модули рядом друг с другом согласно комплектации,
отрегулировать опоры при необходимости. Накрыть сверху столешницей и
закрепить столешницу:
при помощи винтов 4х10 - для столешниц из нержавеющей стали,
При помощи шурупов 4,2х9,5 - для столешниц из НРЛ-пластика.
- 4.3. Шкаф готов к эксплуатации.

личная подпись

Ф.И.О.

листа(ов)

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

