

DECLARATION

I Stewart Iren (name), of 16B, Le Village, 49 Village Road, Happy Valley, HK
(address), solemnly and sincerely declare that: _____

I declare that the attached document marked as A is the original document. _____



And I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue of the Oaths and Declarations Ordinance.

Stewart Iren
(signature of declarant)

Declared at Central & Western District Office in the HKSAR this _____ day of 9 AUG 2024, 20____

✓ through the interpretation of _____ (name) of _____
(address and occupation), the
said interpreter having been also first declared/sworn* that he/she* had truly, distinctly, and audibly interpreted the contents of
this document to the declarant, and that he/she* would truly and faithfully interpret the declaration about to be administered to
him/her* ✓

Before me,

KWOK Lai-yan

Commissioner for Oaths

✓ #1, _____ (name), of _____
_____ (address), solemnly and sincerely declare/swear* that I well understand the official
language in which this document is written and _____ language and that I have truly, distinctly,
and audibly interpreted the contents of this document to the declarant _____ (name), and
that I will truly and faithfully interpret the declaration about to be administered to him/her*.

(signature of interpreter)

Declared/Sworn* at _____ in the HKSAR this _____ day of _____ 20____

Before me,

Commissioner for Oaths# ✓

Please delete the relevant paragraphs if no interpreter is involved
* Please delete where appropriate
HAD 5 (S) Rev. 10/2020

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ медицинского изделия



Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd.

Маска термопластическая Klarity, в вариантах исполнения

«APPROVED BY»/«УТВЕРЖДАЮ»

Director / Директор

Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd.

[Signature] Lucy Lee (Люси Ли)

Stamp/печать



Date: 09-07-2024

Rev. 2.0, 07-2024 / Ред. 2.0, 07-2024

Manufacturer:


Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd.

1-6 Floors, No. 14, 3rd Street Shawan, GETDD, 510730, Guangzhou, China

Tel: +86 20 82226380 Fax: +86 20 82088552

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued. To verify the issuance of this Apostille, see "https://www.judiciary.hk/en/court_services_facilities/apostille_verification.html"

此項文件加簽僅就公共文件上簽署的真確性、簽署人的身分及，如適用的話，文件上的蓋章蓋印予以證明。此項文件加簽並不就文件的內容作出證明。就發出此文件加簽之查證，見 "https://www.judiciary.hk/zh/court_services_facilities/apostille_verification.html"

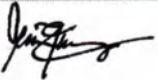APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: 國家/地區		Hong Kong, China 中國香港	
This public document 此公共文件			
2. has been signed by 簽署人為		KWOK Lai-yan 郭麗欣	
3. acting in the capacity of 其行事的身分為		Commissioner for Oaths 監誓員	
4. bears the seal / stamp of 蓋有的蓋章/蓋印		KWOK Lai-yan 郭麗欣	
Certified 加簽證明			
5. at 在	High Court 高等法院	6. the 於	12 AUG 2024 2024 年 08 月 12 日
7. by 由	Simon KWANG Registrar, High Court 鄭卓宏 高等法院司法常務官		
8. No 編號	99976 / 2024		
9. Seal / stamp: 蓋章/蓋印		10. Signature: 簽署	

Reference Code 參考編號: 8DF14B70



Введение

Контактная информация для получения дополнительной информации:

Представитель в США: Klarity Medical Products USA, 1987 Coffman Road, Newark, Ohio 43055, Toll-free: 877-599-8905, Tel: 740-788-8107, Fax: 740-788-8109, sales@klaritymedical.com.

Производитель: "Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd.", 1-6 Floors, No. 14, 3rd Street Shawan, GETDD, 510730, Guangzhou, China (Китай), тел. 86 (20) 8222 6380, факс 86 (20) 8222 1907, sales@klaritymedical.com

Уполномоченный представитель в России: ООО «Мед-Спектрум», Россия, 143345, Московская область, г. Наро-Фоминск, д. Мипуткино, ул. Солнечная 1-я, д. 91, стр. 1; тел./факс +7(495) 796-24-23; info@med-spectrum.ru.

Информация для пользователя настоящей инструкции по эксплуатации!

Маска термопластическая Klarity, в вариантах исполнения в тексте настоящей инструкции по эксплуатации может обозначаться как «маска термопластическая» или просто «маска».

Символы, которые Вы увидите на маркировке.

№ п/п	Символ	Расшифровка символа
1.		Дата производства
2.		Производитель
3.		Использовать до
4.		Хрупкое. Осторожно
5.		Беречь от влаги
6.		Ограничение температуры
7.		Обратитесь к руководству по эксплуатации
8.		Верх

Klarity

9.		Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации.
10.		Код партии
11.		Каталожный номер
12.		Соответствует CE
13.		MP-безопасные

Наименование и назначение

Маска термопластическая Klarity, в вариантах исполнения предназначена для иммобилизации и точного позиционирования частей тела пациента во время проведения терапевтических процедур лучевой терапии. Служит для предотвращения движения пациента.

Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на следующие термопластические маски Klarity:

Маска термопластическая Klarity, в вариантах исполнения:

I. Маска термопластическая Klarity, в вариантах исполнения:

1. Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame, модели: R430UC, R450U, R420W, R430W, R420-1W, R430-1W, R421W, R431W, R464-1W, RG420W, RG430W, RG420-1W, RG430-1W, RG421W, RG431W, RG460-1W, RG461-1W, RG464-1W, RG415E, RG420E, RG430E, RG421E, RG431E, R430-2WF, RB430W-3210, RB431W-3210, RB431W-3210F, R-UC1-2436, R-UC1-3242, RB430WS, R480E, R480W.
2. Маска термопластическая Klarity, тип S-Type, модели: R460SHT, R461SHT, R460-4SHT, R461-4SHT, R460ST, R461ST, R460-4ST, R461-4ST, R461-8SHTF, R461-8STF, R470SH, R471SH, R470S, R471S, RG465SHT, RG460SHT, RG461SHT, RG460-4SHT, RG461-4SHT, RG460-5SHT, RG461-5SHT, RG460ST, RG461ST, RG460-4ST, RG461-4ST, RG460SC, RG461SC, RG470SH, RG471SH, RG470S, RG471S, RG460-8SHTM, RG461-8SHTM, RG460-8STEM, RG461-8STEM, RB461-3210SHT, RB461-3210ST, RB461-6SHTF, RB461-6SHTM, RB461-6STF, RB461-6STEM.
3. Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модели: RD105-1636N, RD105-2015N, RD105-2022N, RD105-2036N, RD105-2415N, RD105-2422N, RD105-2436N, RD105-3242N, RD107-2015N, RD107-2022N, RD107-2422N, RD107-3242N, RD206-2022N, RD206-2422N, RD206-2436N, RD207-2022N, RD207-2422N, RD207-3242N, RD104-2022N, RD202-2022N, RD204-2022N, RD301-2022, RD301-3242, RD901-2436, RD901-3242, RD401L-3242, RDG105-20A, RDG105-24A, RDG105-32A, RDG105-2015N, RDG105-2022N, RDG105-2422N, RDG107-24A, RDG107-32A, RDG107-2015N, RDG107-2022N, RDG107-2422N, RDG107-2436N, RDG107-3242N, RDG206-24A, RDG206-32A, RDG207-2022N, RDG207-3242N, RDG207-24A, RDG207-32A, RDLG105-24AF, RDLG207-24AF, RDLG107-2412C, RDLG202-2412C, RDLG204-2412C, RDLG260XL-20A, RDLG260XL-24A, RDLG260L-2412C, RDLG260M-2412C, RDLG260S-2412C.
4. Маска термопластическая Klarity, тип P-Type, модели: R-PRT2-2022, R-PRT2-2415, R-PRT2-2422, R-PRT2-2436, R-PRT2-3242, R-PRT3-2011, R-PRT3-2015, R-

PRT3-2022, R-PRT3-2400, R-PRT3-2415, R-PRT3-2422, R-PRT3-2436, R-PRT3-3242, R-PRT31-2022, R-PRT31-2415, R-PRT31-2436, R-PRT31-3242, R-PRT44-2015, R-PRT44-2022, R-PRT44-2415, R-PRT44-2422, R-PRT44-2436, R-PRTL-2400, R-PRTL-2415, R-PRTL-2436, R-PRTL-3242, R-PRT5-2415, R-PRT5-2422, R-PRT5-2436, R-PRT5-3242, RG-PRT2-2015, RG-PRT2-2415, RG-PRT3-2015, RG-PRT3-2022, RG-PRT3-2400, RG-PRT3-2415, RG-PRT3-2422, RG-PRT3-2436, RG-PRT3-24A, RG-PRT31-2015, RG-PRT31-2022, RG-PRT31-2436, RG-PRT31-3242, RG-PRT44-2015, RG-PRT44-2022, RG-PRT44-2415, RG-PRT44-2436, RG-PRTL-2015, RG-PRTL-2400, RG-PRTL-2436, RG-PRTL-3242, RG-PRT5-2015, RG-PRT5-2022, RG-PRT5-2415, RG-PRT5-2422, RG-PRT5-2436, RG-PRT5-3242, RG-PRT5-24A, RG-PRT5-32A.

5. Маска термопластическая Klarity, тип V-Type, модели: R460VT, R461VT, R460VHT, R461VHT, RG460-4VT, RG461-4VT, RG460VT, RG461VT, RG460-4VHT, RG461-4VHT, RG460VHT, RG461VHT, RG460-5VHT, RG461-5VHT, RG460VC, RG461VC, RB461-3210VHT, RB461-6VHTF, RB461-6VHTEM, RB461-3210VT, RB461-6VTF, RB461-6VTEM, R461-6VTF, R461-6VHTF.

6. Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой PelvicFix, модели: R902-1, R902-3, R902-7, R902-1A, R902-3A, R902-7A.

7. Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модели: R91-2400M, R91-2436M, R91-3242M, R420-24A, R920-24A, RLG320-S24A, RLG320-S32A, R322-S424C1-L, R322-S424C1-R, R902-3242Q1, R902-2436Q1, R902-32NQ1, R902-3242Q2, R902-2436Q2, R902-32NQ2, R902-3242Q2L, R902-2436Q2L, R902-32NQ2L, RLG902-2436BA, RLG902-2436TL, в составе:

7.1. Маска термопластическая.

7.2. Планка прижимная для термопластических фиксаторов многоразовая – не более 50 шт. (при необходимости).

7.3. Планка прижимная для термопластических фиксаторов многоразовая удлиненная – не более 50 шт. (при необходимости).

8. Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модель R406-1, в составе:

8.1. Верхняя маска термопластическая Klarity R406-1.

8.2. Нижняя маска термопластическая Klarity R406-1.

8.3. Средняя маска термопластическая Klarity R406-1.

8.4. Гранулы сыпучие, 1 уп.

8.5. Фиксатор для зубов.

9. Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модель R406-3, в составе:

9.1. Верхняя маска термопластическая Klarity R406-3.

9.2. Нижняя маска термопластическая Klarity R406-3.

9.3. Средняя маска термопластическая Klarity R406-3.

9.4. Гранулы сыпучие, 1 уп.

9.5. Фиксатор для зубов.

10. Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модель RG406-3, в составе:

10.1. Верхняя маска термопластическая Klarity RG406-3.

10.2. Нижняя маска термопластическая Klarity RG406-3.

10.3. Средняя маска термопластическая Klarity RG406-3.

10.4. Гранулы сыпучие, 1 уп.

10.5. Фиксатор для зубов.

11. Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модель R408, в составе:

11.1. Верхняя маска термопластическая Klarity R408.

11.2. Нижняя маска термопластическая Klarity R408.

11.3. Средняя маска термопластическая Klarity R408.

11.4. Гранулы сыпучие, 1 уп.

11.5. Фиксатор для зубов.

12. Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модель RG408, в составе:

12.1. Верхняя маска термопластическая Klarity RG408.

12.2. Нижняя маска термопластическая Klarity RG408.

12.3. Средняя маска термопластическая Klarity RG408.

12.4. Гранулы сыпучие, 1 уп.

12.5. Фиксатор для зубов.

13. Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модель R408-2, в составе:

13.1. Верхняя маска термопластическая Klarity R408-2.

13.2. Нижняя маска термопластическая Klarity R408-2.

13.3. Средняя маска термопластическая Klarity R408-2.

13.4. Гранулы сыпучие, 1 уп.

13.5. Фиксатор для зубов.

14. Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модель R408A-1 в составе:

14.1. Верхняя маска термопластическая Klarity R408A-1.

14.2. Нижняя маска термопластическая Klarity R408A-1.

14.3. Средняя маска термопластическая Klarity R408A-1.

14.4. Гранулы сыпучие, 1 уп.

15. Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модель RG408A-1 в составе:

15.1. Верхняя маска термопластическая Klarity RG408A-1.

15.2. Нижняя маска термопластическая Klarity RG408A-1.

15.3. Средняя маска термопластическая Klarity RG408A-1.

15.4. Гранулы сыпучие, 1 уп.

16. Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Encompass, модели: RBSRS-3210Q, RBSRS-3210QF в составе:

16.1. Верхняя маска термопластическая.

16.2. Нижняя маска термопластическая.

16.3. Прокладка для шиммирования, не более 50 шт.

16.4. Адаптер для фиксации маски на устройства иммобилизации с креплением типа S-Type (при необходимости).

17. Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity SRS, модели: RBSRS-01, RBSRS-F01, в составе:

17.1. Верхняя маска термопластическая.

17.2. Нижняя маска термопластическая.

18. Маска термопластическая, совместимая с системой Gamma Knife, модели: RB-ESH3-3210CN, RLG-ESH3-2412CN.

19. Маска термопластическая, совместимая с системой Fraxion, модели: RLG-ESH1-2412C, RLG-ESH1-3212CF, RB-ESH1-3210C, RLG-ESH2-2412C, RB-ESH2-3210C, RB-ESH2-3210CF.

20. Маска термопластическая, совместимая с системой HeadSTEP, модели: RLG-ELH-2412CN, RLG-ELS-2412CN, RLG-ELN-2412C, RG-ELH-2022N, RG-ELS-2022N.

21. Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BoS, модели: RB-BHS-3210, RB-BHM-3210, RB-BHL-3210, RB-BHMF-3210, RB-BSM-3210, RB-BSL-3210, RB-BSLF-3210, RG-BHM-2436F, RG-BHM-3242F, RG-BSM-2436F, RG-BSM-3242F, RG-BHS-A2436.

22. Маска термопластическая Klarity для протонной терапии, тип Proton-K, модели: RG-PH-2436C, RG-PH-3242C, RG-PS-2436C, RG-PS-3242C.

II. Инструкция по эксплуатации

Область применения медицинского маски: В онкологии при проведении лучевой терапии.

Условия применения медицинского маски:

В условиях специализированных клиник и больниц.

Для достижения максимального терапевтического эффекта от лучевой терапии, необходимо, чтобы радиационный пучок каждый раз точно попадал в опухоль, не причиняя при этом вреда соседним здоровым тканям. Термопластические маски гарантируют, что пациент, а, следовательно, и опухоль, будут находиться в одном и том же положении в течении всей процедуры, а также от фракции к фракции.

Предполагаемые пользователи: специалисты по лучевой терапии.

Краткое описание

Термопластические маски представляют собой листы из термопластического материала с перфорацией, закрепленные на рамке из пластмассы, или листы без перфорации из термопластичного материала, закрепленные на рамке из пластмассы.


Термопластическая маска размягчается при нагреве и накладывается на зону части тела пациента, которая в дальнейшем будет подвергаться лучевой терапии, далее маску прикрепляют к устройству системы позиционирования пациента.

После завершения процесса формирования маски и ее затвердевания образуется слепок необходимой части тела пациента.


Гранулы используются для создания уплотнения на переносице пациента, чтобы термопластическая маска не пережимала нос.

Фиксатор для зубов захватывается ртом пациента. Прокусывать или пытаться продавить зубами фиксатор запрещено.


Маска состоит из рамки и вставки. Вставка изготовлена из термопластика, а также имеет различный рисунок перфорации.

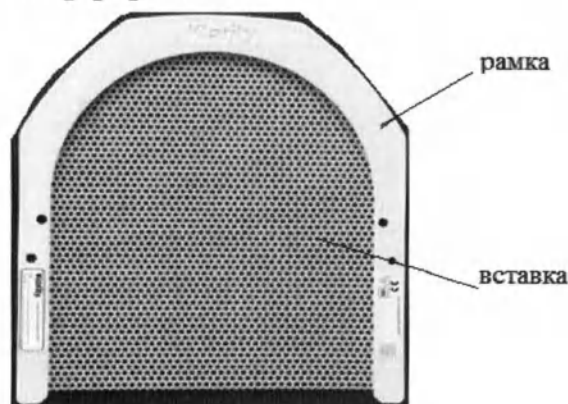


Варианты исполнения рисунка перфорации.

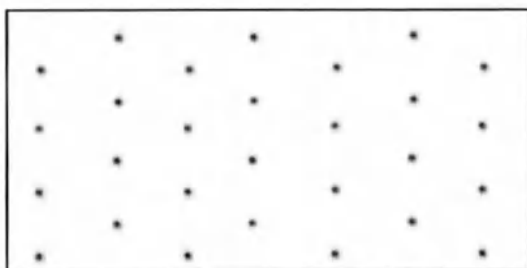


Перфорация 10%

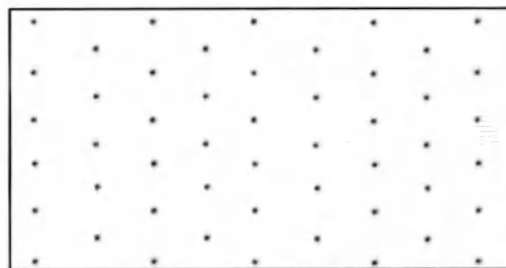


Перфорация 12%

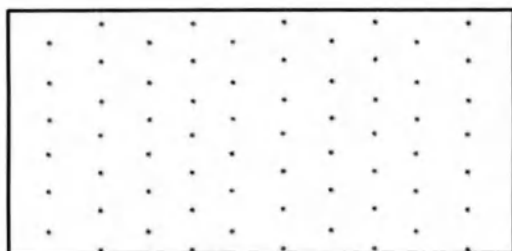


Перфорация 15%

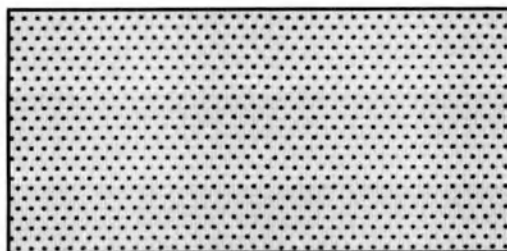

Перфорация 22%

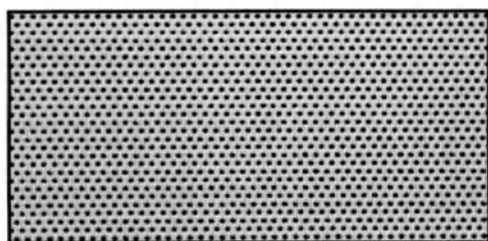


Перфорации 36%

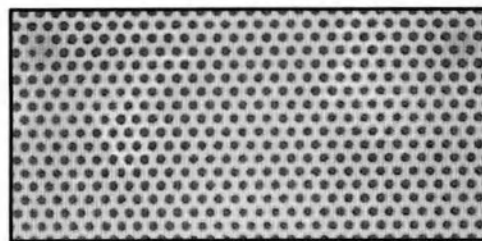


Перфорации 42%


Варианты исполнения рисунка перфорации масок используемых для проведения лучевой терапии с модулированной интенсивностью (Intensity-modulated radiation therapy, IMRT).

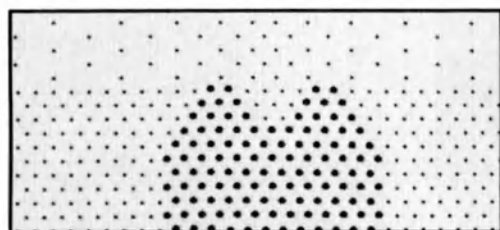


Перфорации для IMRT

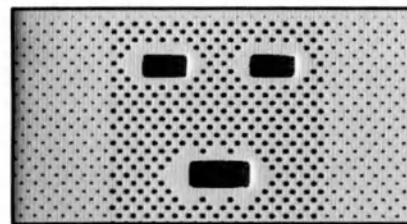


Перфорации для IMRT Open EM
(отверстия для глаз и рта)

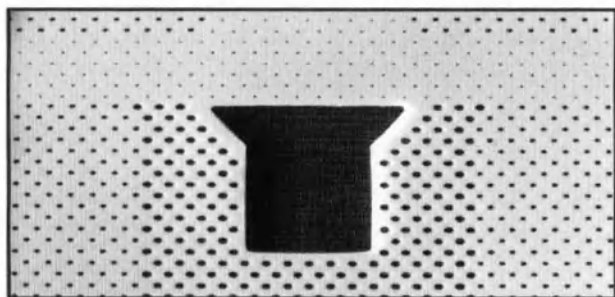

Перфорации для IMRT Open Face
(отверстие для переносицы)

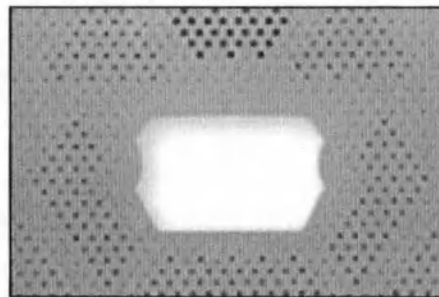

Перфорации для IMRT Open Face
(отверстие для лица)

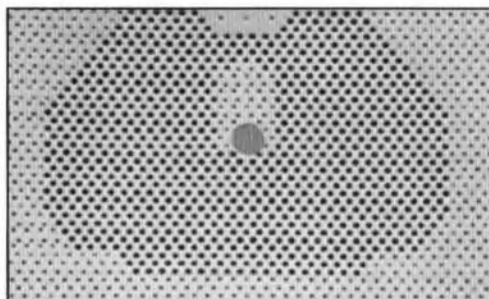

Перфорации для IMRT
(отверстие для носа)

Комплект поставки

Количество термопластических масок типа U-Frame, типа S-Type, типа O-Type, типа P-Type, типа V-Type, типа Proton-K, масок совместимых с системой PelvicF, Gamma Knife, Fraxion, HeadSTEP и BoS в комплекте поставки (в коробке) указано в таблицах раздела «Технические характеристики», а также на упаковке самого изделия. В каждой коробке находится настоящая инструкция.

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, BrainLab, Encompass, Klarity SRS поставляется в картонной упаковке согласно своему составу и количеству, указанным в разделе «Технические характеристики», а также на упаковке самого изделия, совместно с инструкцией по эксплуатации (внутри одной коробки одна инструкция).

Показания и противопоказания

Показания: термопластические маски показаны для иммобилизации и точного позиционирования частей тела пациента во время проведения терапевтических процедур лучевой терапии специалистами по лучевой терапии.

Обеспечивают внешнюю поддержку и стабилизацию, с целью предотвращения движения пациента во время проведения терапевтических процедур лучевой терапии.

Противопоказания: индивидуальная аллергическая непереносимость материалов, непосредственно контактирующих с организмом человека, открытые раны и поражения кожи пациента.

Возможные побочные действия: аллергическая реакция, вследствие индивидуальной непереносимости материала изготовления термопластической маски.

Предостережения



Игнорирование данной информации может повлиять на безопасность пациента и привести к неблагоприятным последствиям.



- Перед использованием маски специалист должен ознакомиться с данной инструкцией.
- После распаковки маску следует проверить и убедиться в отсутствии повреждений, полученных при транспортировании.
- Любые открытые раны или поражения кожи пациента должны быть покрыты перевязочным материалом или полиэтиленовой пленкой перед использованием маски.
- Биологическое разложение: возможно разложение в высоко-бактериальной среде, такой, как компост с высокой влажностью.

Технические характеристики

Удельная плотность – не менее 1,11 г/см³.

	Модели из термо-пластика Klarity White	Модели из термо-пластика Klarity Green	Модели из термо-пластика Klarity Lite Green**	Модели из термо-пластика Klarity Blue
Пластичность при нагреве до 70°C, не менее, с	30	90	70	70
Время формования, с*	30-45	90-120	70-100	70-80
Время затвердевания, не более, мин	5,5	8	10	10
Величина усадки, % (через 24 часа), не более	13	6	5	1,0
Температура на поверхности вставки, °C, не более *	50	50	50	50



* при нагреве до температуры +70°C

** маска модели RB430WS произведена из термопластика Klarity Lite Green и имеет мягкое напыление.

Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame

Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame, модели RG415E, RG420E, RG430E.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с узкой рамкой U-Max Frame, выполненной из термопластика Klarity Green, приведен ниже.

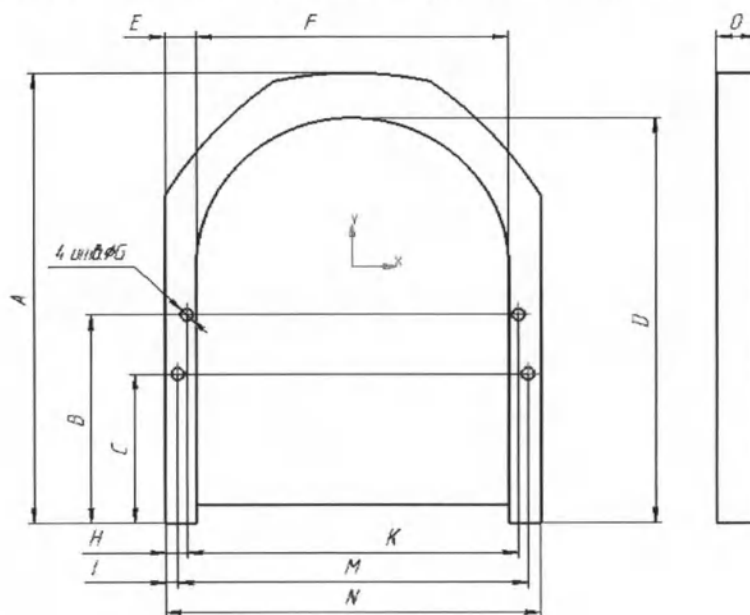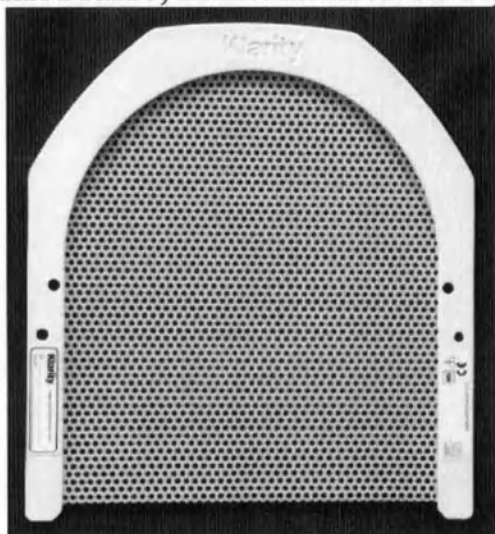

Основные технические характеристики:



Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт.
RG415E	2,0	210	12
RG420E	2,4	216	12
RG430E	3,2	225	12

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O
330	160	125	300	26	256	6,9	18	270	10	284	305	12,5

Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame, модели RG421E, RG431E.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с узкой рамкой U-Max Frame и удлиненной вставкой, выполненной из термопластика Klarity Green, приведен на рисунке ниже.

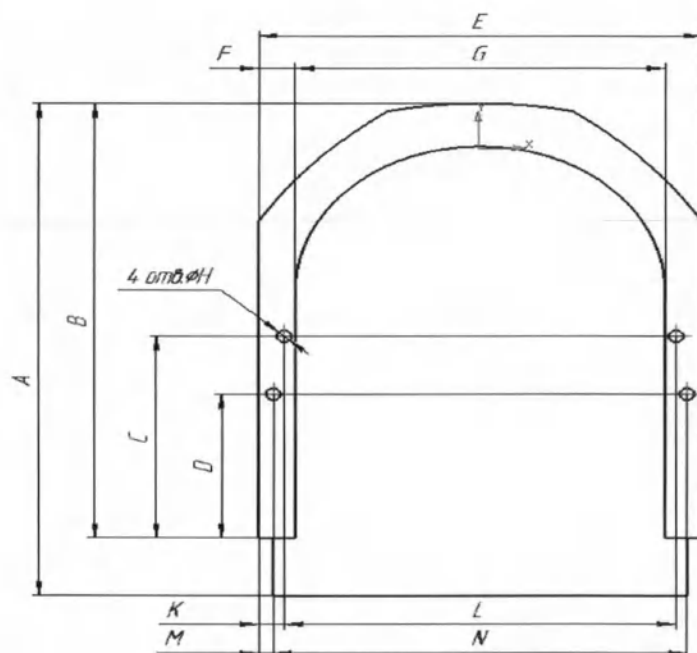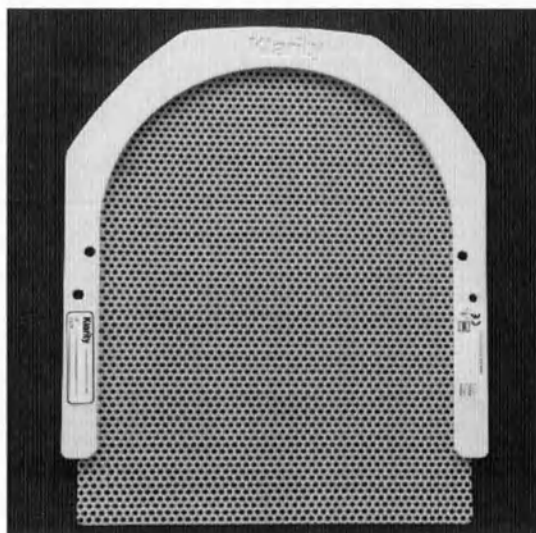

Основные технические характеристики:


Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG421E	2,0	236	12
RG431E	2,4	230	12

Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O
380	330	160	125	305	26	256	6,9	270	10	284	12,5

Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame, модели R420-1W, R430-1W, RG420-1W, RG430-1W.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с рисунком перфорации для лучевой терапии с модулированной интенсивностью (Intensity-modulated radiation therapy, IMRT), с узкой рамкой U-Frame Profile Frame, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

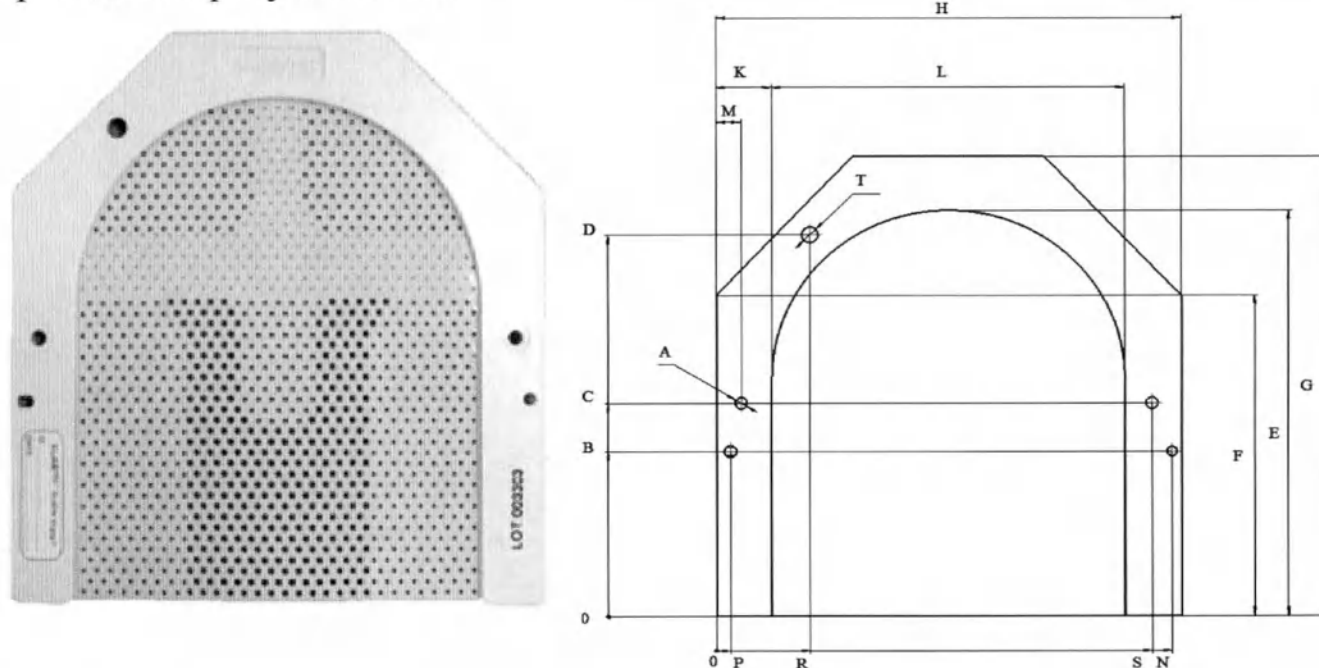

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R420-1W	2,4	236	12
R430-1W	3,2	249	12
RG420-1W*	2,4	236	12
RG430-1W*	3,2	249	12



Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	R	S	T
6,9	95	124	223	235	190	273	255	31,2	195	14	248	8	50	242	9,5

Маска термопластическая Klarity, тун U-Frame, модели R420W, R430W, RG420W, RG430W.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с узкой рамкой U-Frame Profile Frame, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

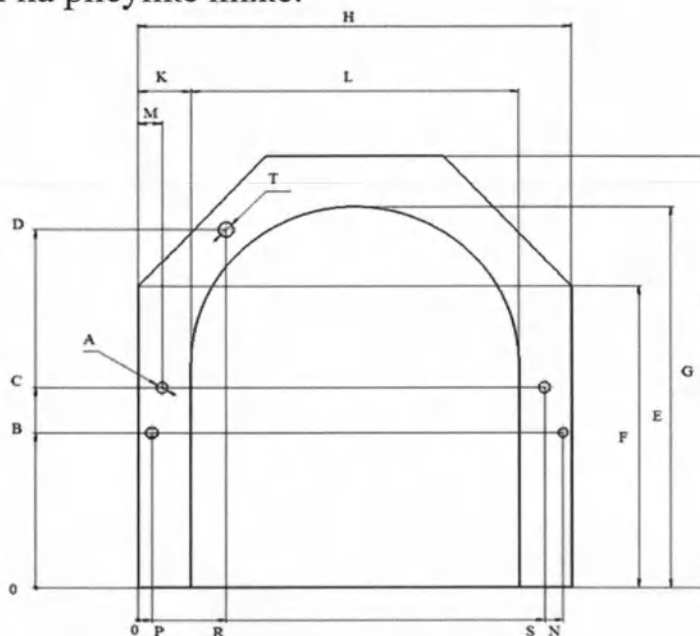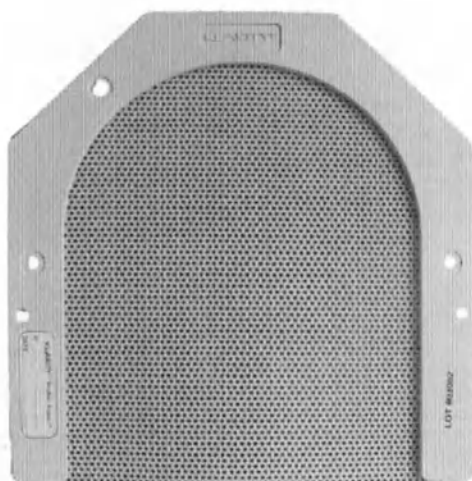

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R420W	2,4	232	12
R430W	3,2	246	12
RG420W*	2,4	232	12
RG430W*	3,2	246	12



Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	R	S	T
6,9	95	124	223	235	190	273	255	31,2	195	14	248	8	50	242	9,5

Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame, модели R421W, R431W, RG421W, RG431W.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с узкой рамкой U-Frame Profile Frame и удлиненной вставкой, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке 12.

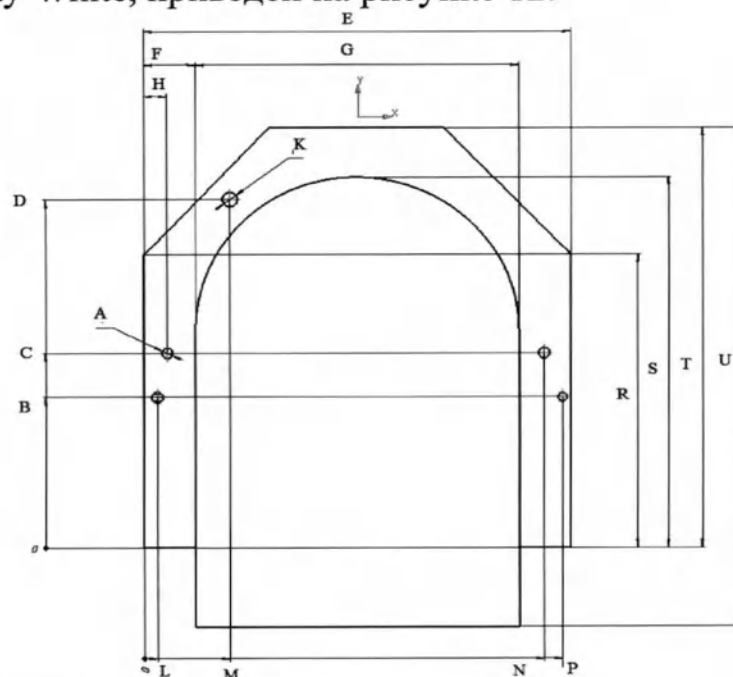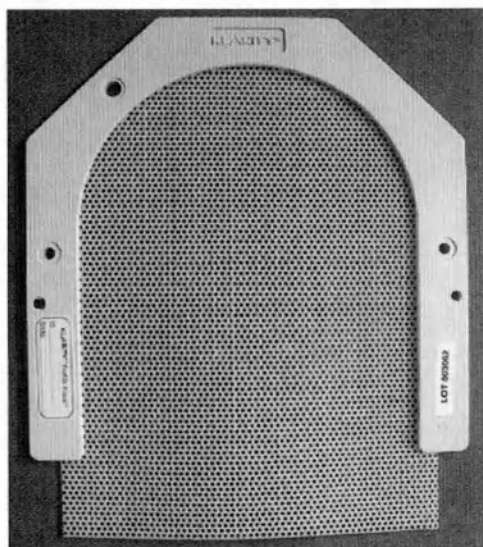

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R421W	2,4	242	12
R431W	3,2	254	12
RG421W*	2,4	242	12
RG431W*	3,2	254	12

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N
6,9	95	124	223	255	31,2	195	14	9,5	8	50	242

P	R	S	T	U
248	190	235	273	370

Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame, модели R430UC.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с узкой рамкой U-Frame Profile Frame и вставкой с контурным краем для подбородка, выполненной из термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

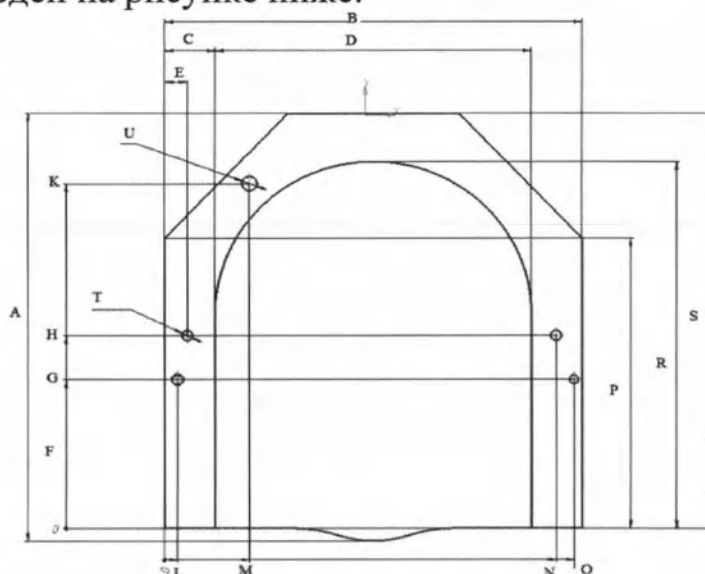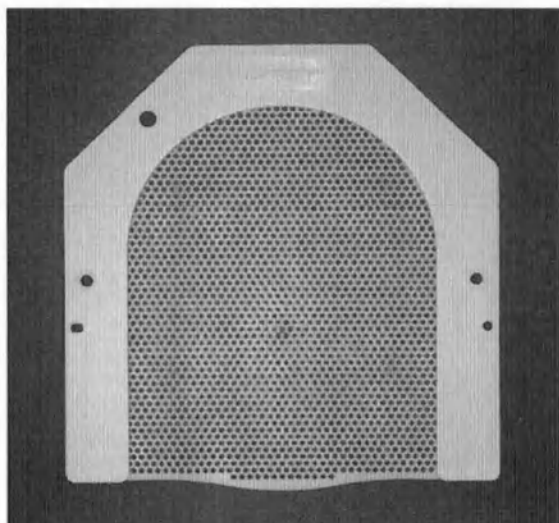

Основные технические характеристики:



Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R430UC	3,2	255	12

Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	R	S	T	U
32	25	31,	19	1	9	2	12	22	8	5	24	19	23	27	6,	9,
3	5	2	5	4	5	9	4	3		0	2	0	5	3	9	5

Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame, модели R450U.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с узкой рамкой U-Frame Profile Frame, вставкой с контурным краем для подбородка, выполненной из термопластика Klarity White, приведен на рисунке 14.

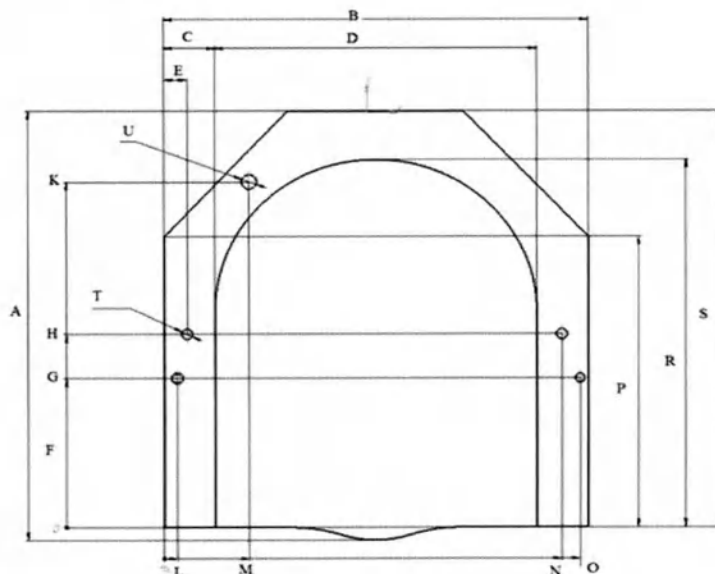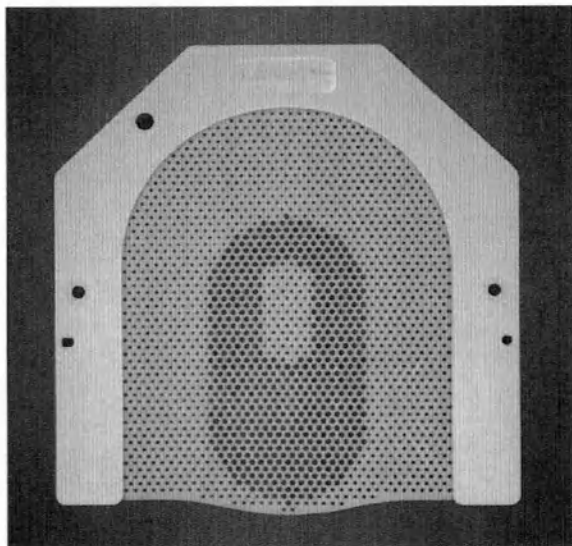

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Габаритные размеры, мм	Упаковка, шт
R450U	2,4	255x275	12



Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M
275	255	38	180	13,5	223	95	124	223	7	50

N	O	P	R	S	T	U
242	248	190	235	273	6,9	9,5

Маска термопластическая Klarity, mun U-Frame, модели R464-1W, RG460-1W, RG461-1W, RG464-1W.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с узкой рамкой U-Frame Profile Frame, с удлиненной вставкой и рисунком перфорации для IMRT исследований, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

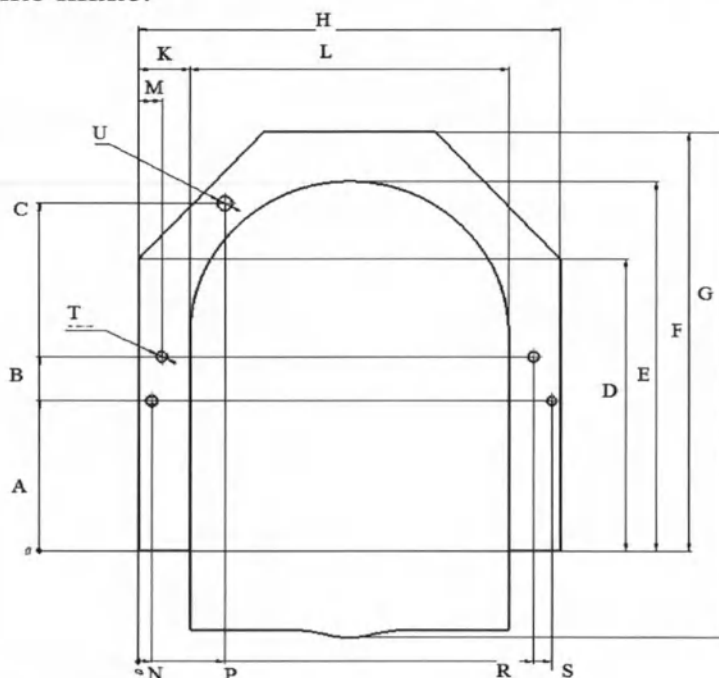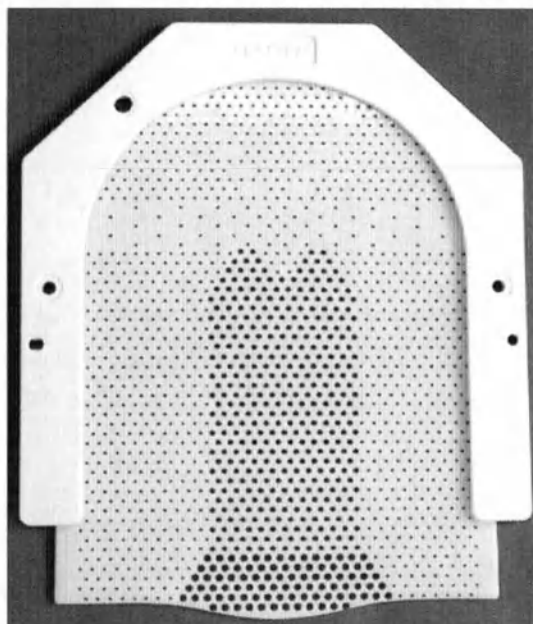

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R464-1W	3,2	248	12
RG460-1W*	2,4	240	12
RG461-1W*	3,2	248	12
RG464-1W*	3,2	254	12



Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	R	S	T
95	124	223	190	235	273	320	255	31,2	195	14	8	50	242	248	9,5

Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame, модель R430-2WF

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой U-Frame Profile Frame и рисунком перфорации для IMRT Open Face (отверстие для лица), выполненной из термопластика Klarity White приведен на рисунке ниже.

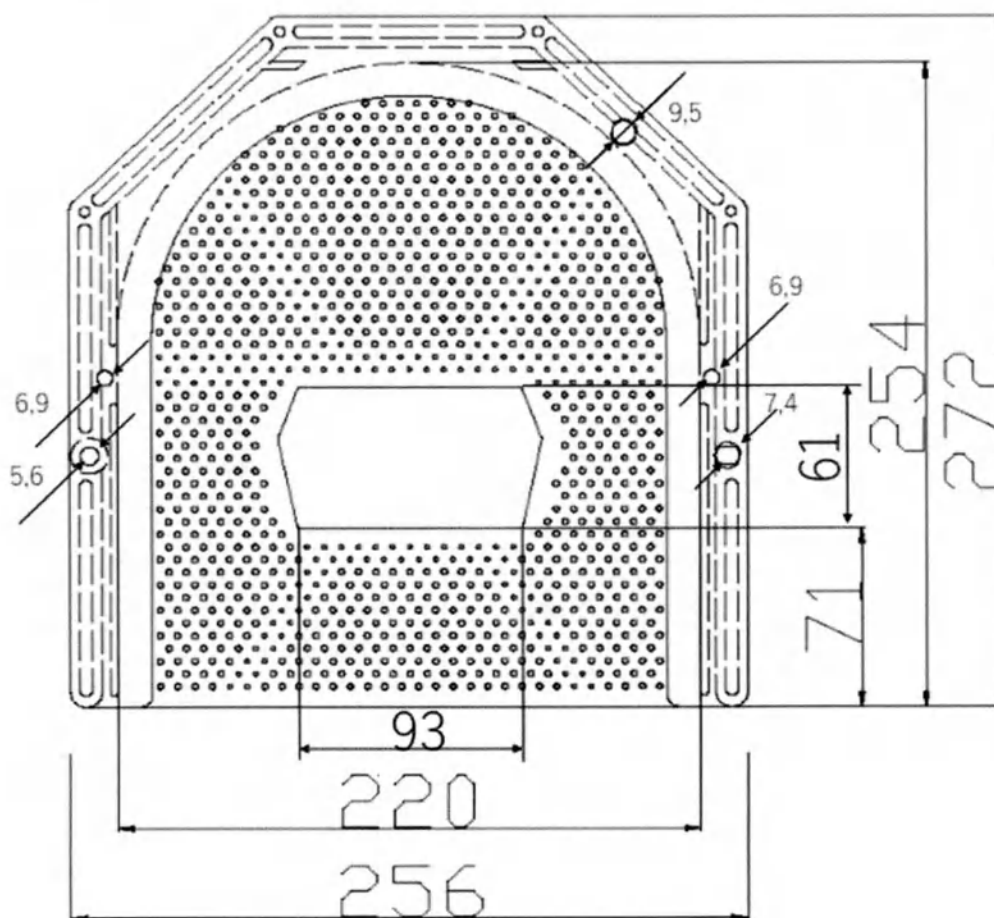
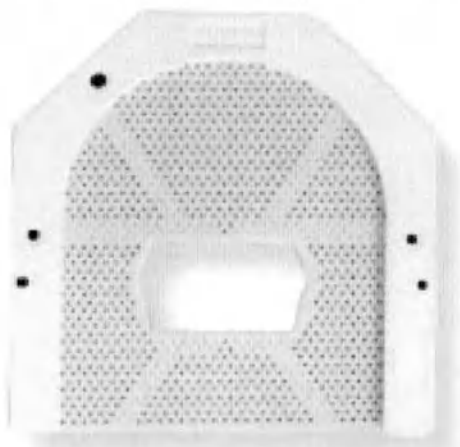


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R430-2WF	3,2	245	12

Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame, модель RB430W-3210

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой U-Frame Profile Frame, выполненной из термопластика Klarity Blue приведен на рисунке ниже.

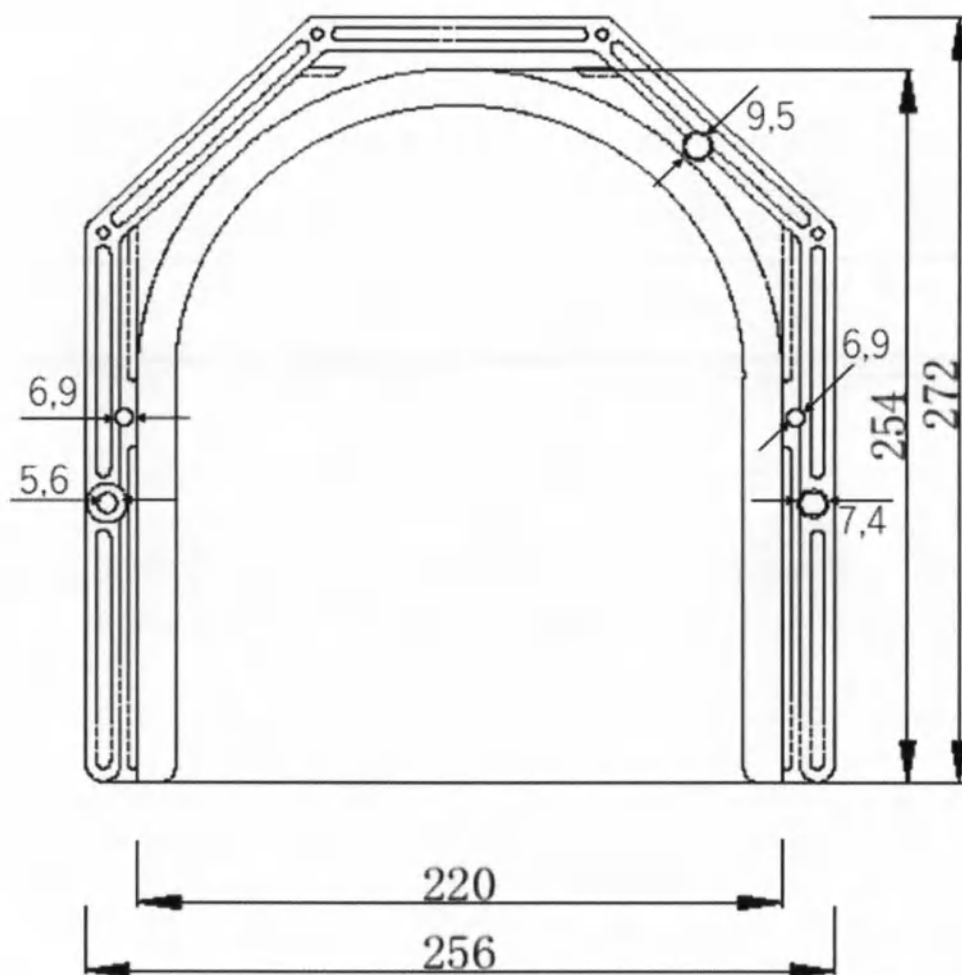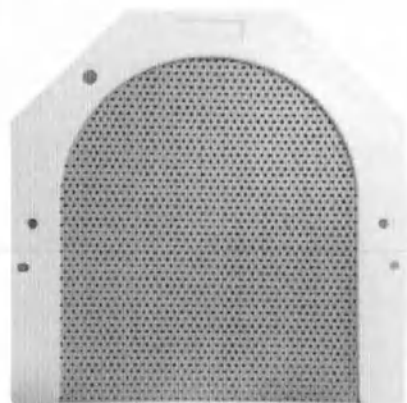


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB430W-3210	3,3	262	12

Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame, модель RB431W-3210

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой U-Frame Profile Frame, с удлиненной вставкой, выполненной из термопластика Klarity Blue приведен на рисунке ниже.


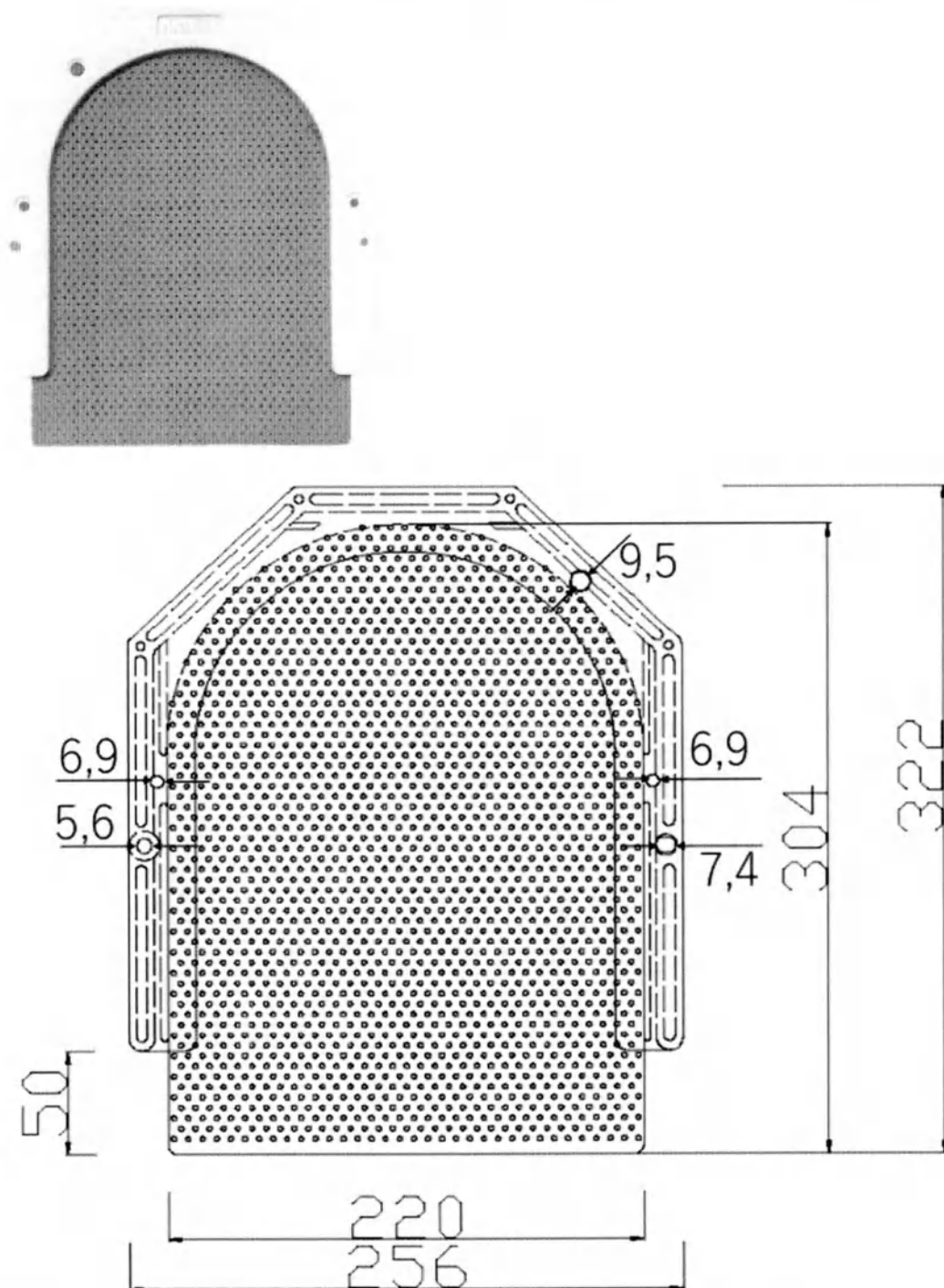


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB431W-3210	3,3	280	12

Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame, модель RB431W-3210F

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой U-Frame Profile Frame, с удлиненной вставкой с отверстием для лица, выполненной из термопластика Klarity Blue приведен на рисунке ниже.

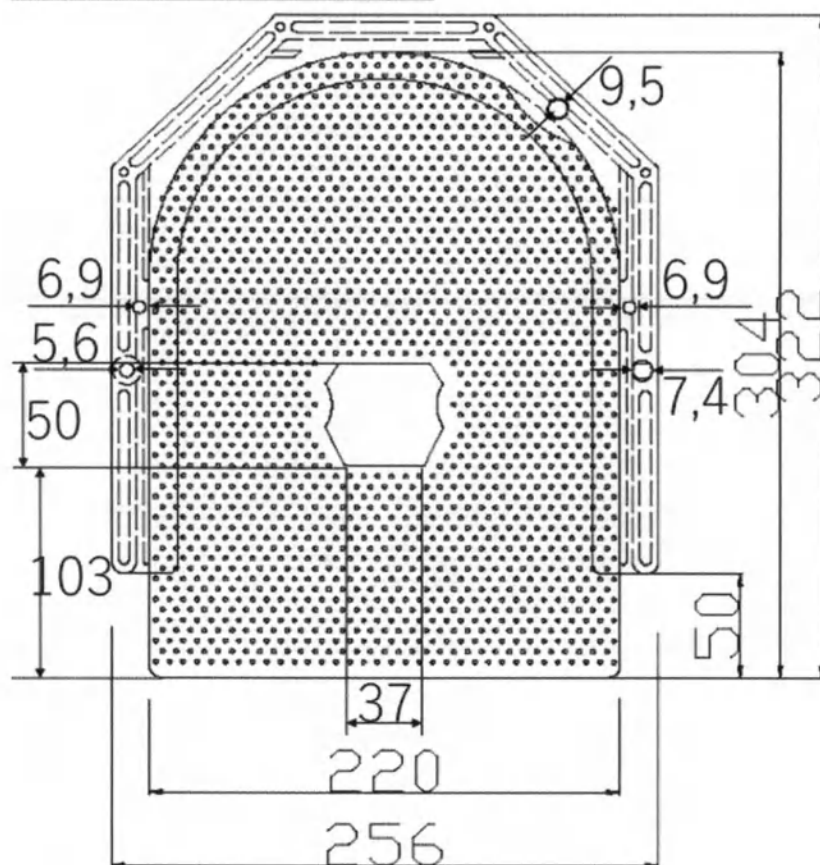
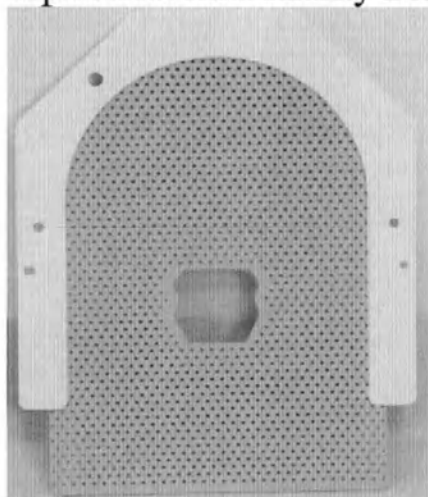


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB431W-3210F	3,3	312	12

Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame, модели: R-UC1-2436, R-UC1-3242

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой U-Frame Profile Frame со вставкой с фигурным краем, состоящей из двух частей на шарнирном соединении, выполненной из термопластика Klarity White приведен на рисунке ниже.

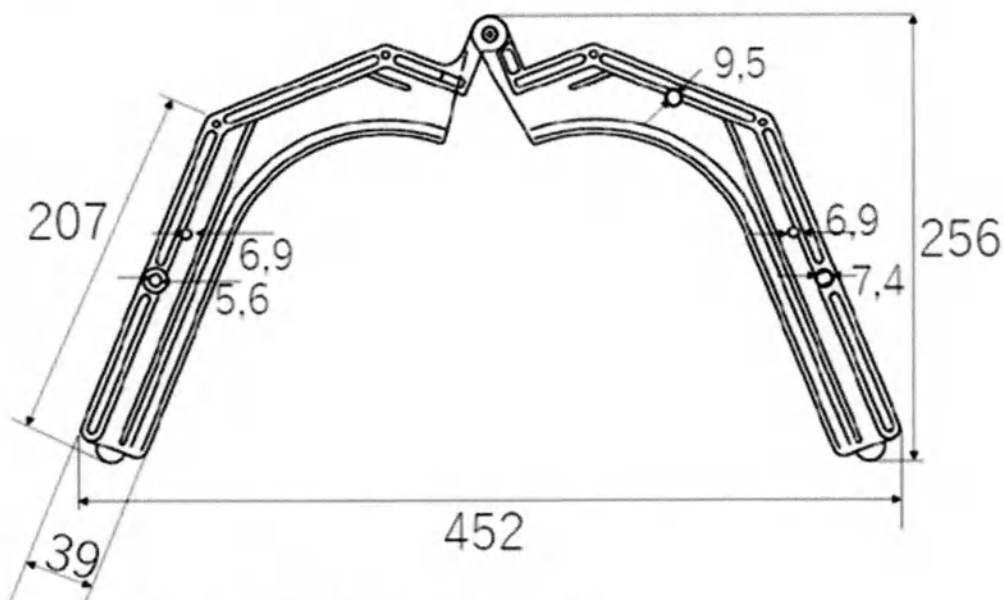
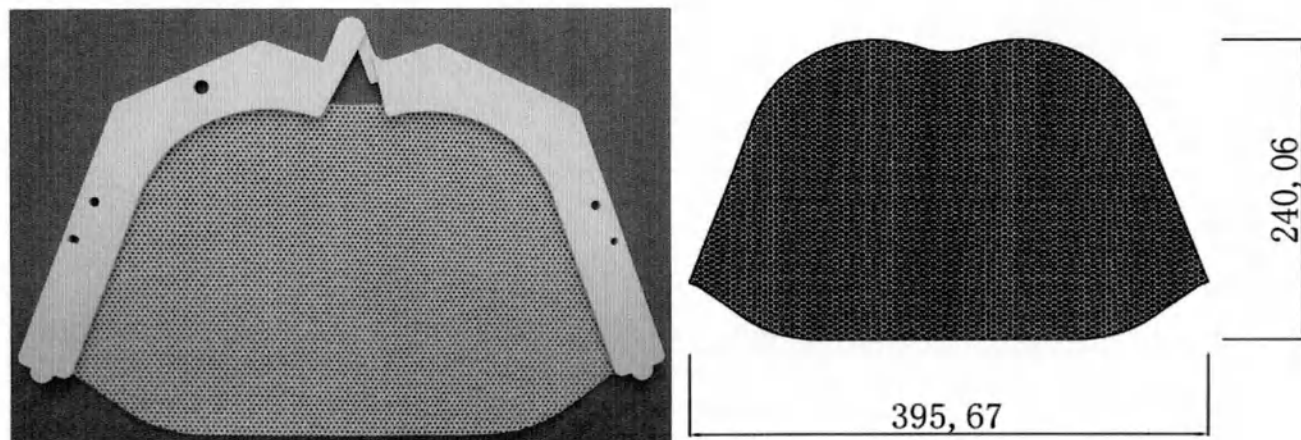


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R-UC1-2436	2,4	232	12
R-UC1-3242	3,2	246	12

Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame, модель RB430WS

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой U-Frame Profile Frame, выполненной из термопластика Klarity Lite Green с мягким покрытием, приведен на рисунке ниже.

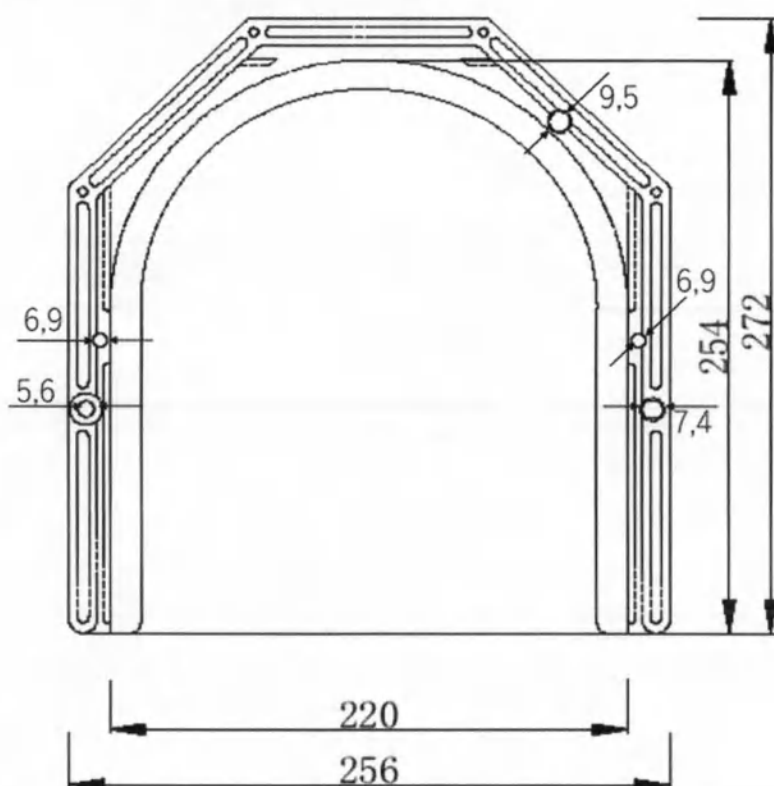
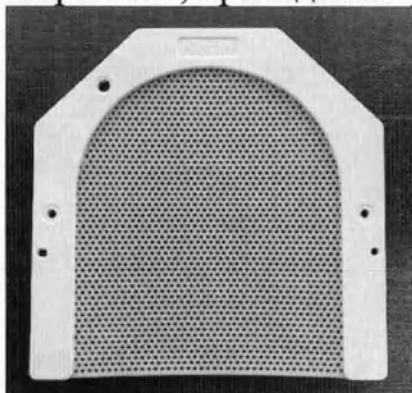


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB430WS	2,4	250	12

Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame, модель R480E

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с узкой рамкой U-Max Frame, выполненной из термопластика Klarity White приведен на рисунке ниже.

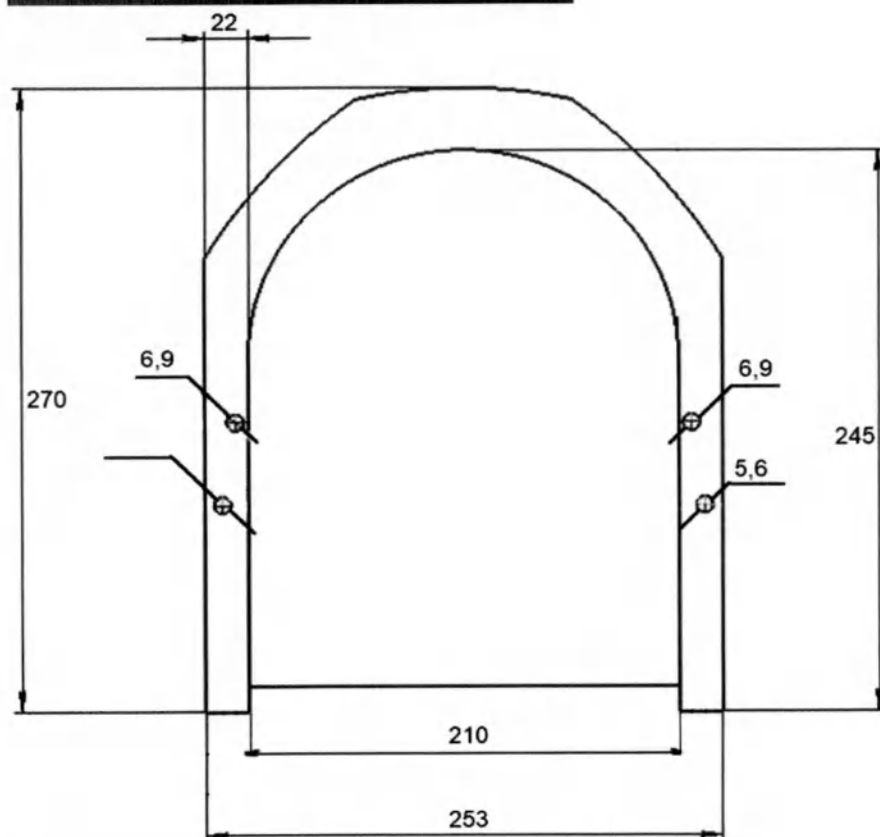
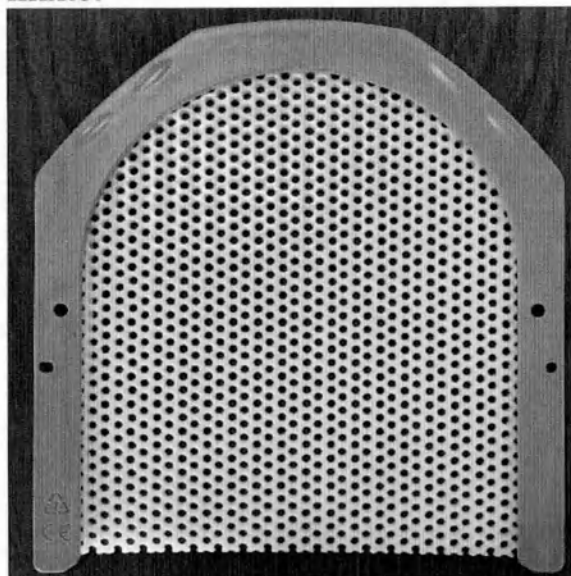


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R480E	4,8	280	12

Маска термопластическая Klarity, тип U-Frame, модель R480W

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой U-Frame Profile Frame, выполненной из термопластика Klarity White приведен на рисунке ниже.

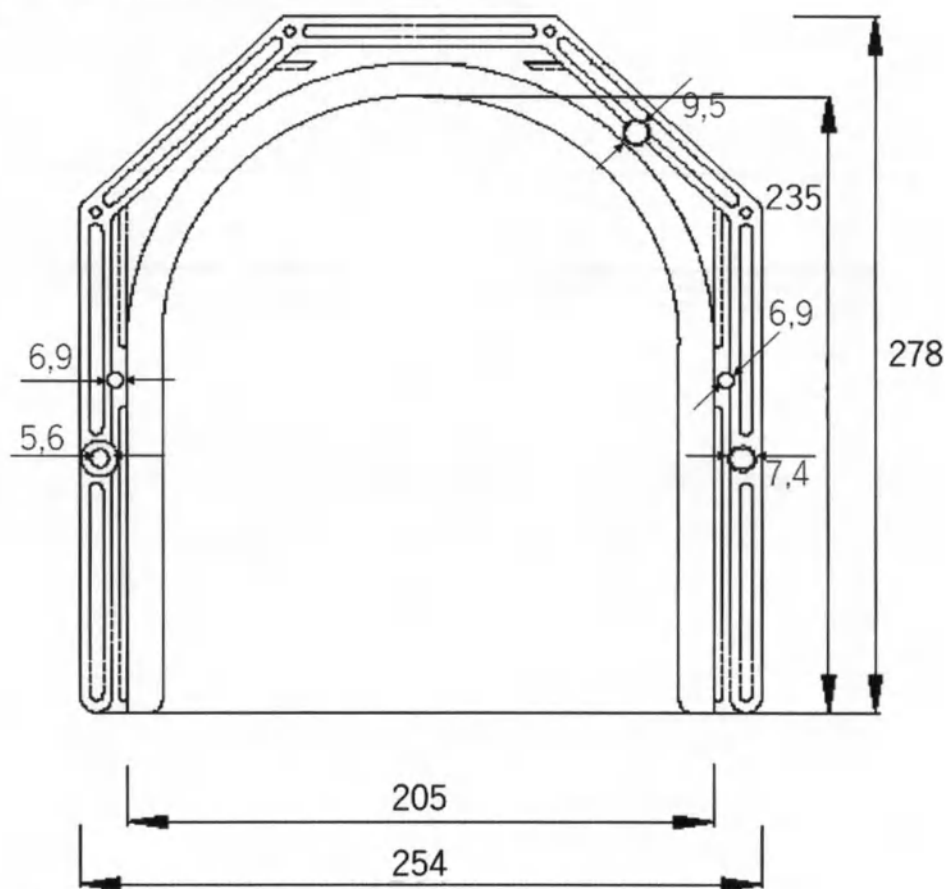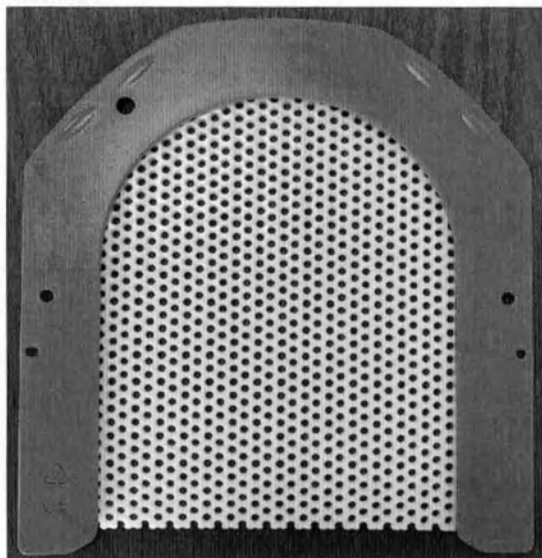



Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R480W	4,8	309	12

Маска термопластическая Klarity, тип S-Type

Маска термопластическая Klarity, тип S-Type, модели R460-4SHT, R461-4SHT, RG460-4SHT, RG461-4SHT.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой крепления типа S-Type, с рисунком перфорации для IMRT исследований, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

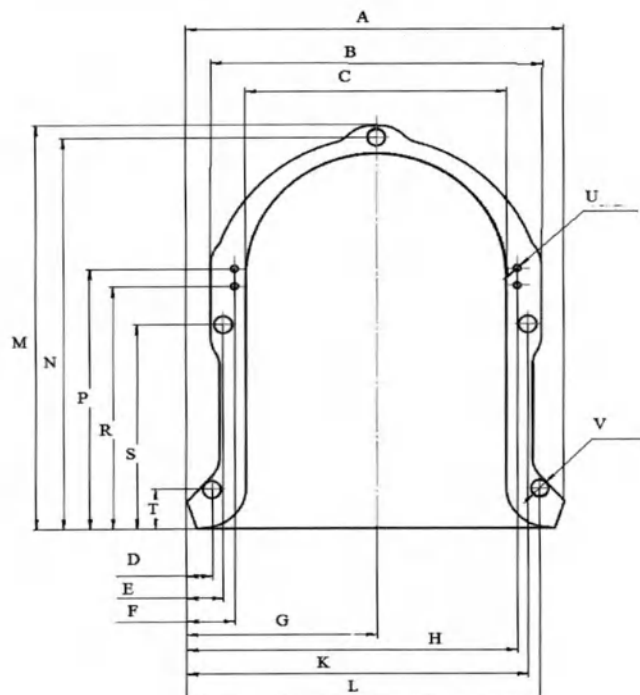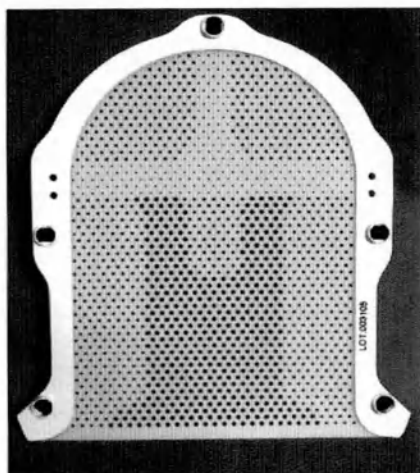

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R460-4SHT	2,4	265	6
R461-4SHT	3,2	272	6
RG460-4SHT*	2,4	265	6
RG461-4SHT*	3,2	272	6

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры (мм)

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M
282	245	194	23	31	33	141	245	254	260	315

N	P	R	S	T	U	V
306	197	185	157	27	4,7	12,9

Маска термопластическая Klarity, тип S-Type, модели R460SHT, R461SHT, RG465SHT, RG460SHT, RG461SHT.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой крепления типа S-Type, с пинами, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

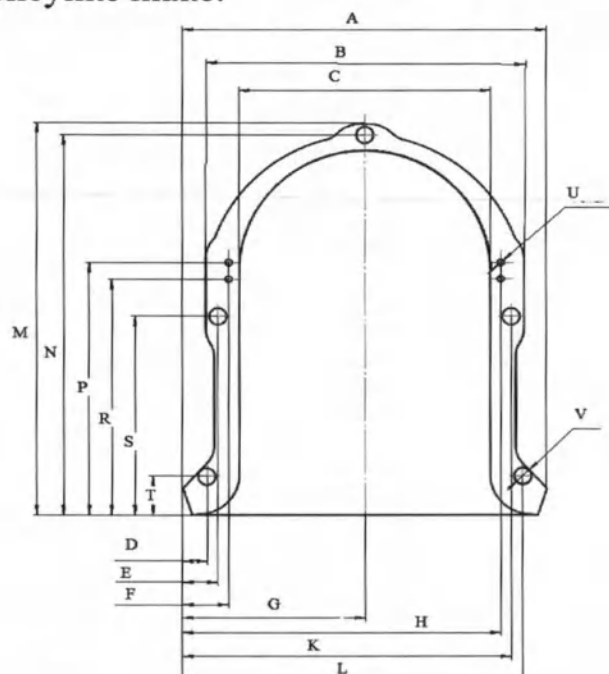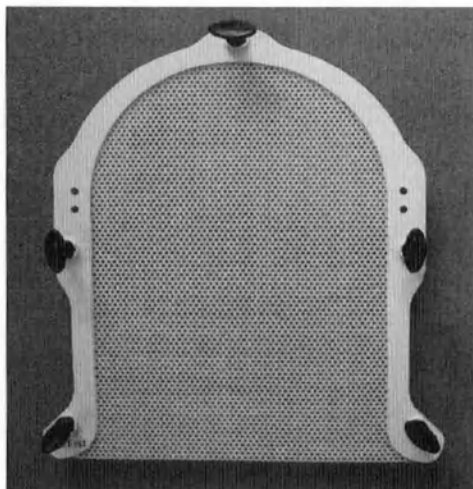

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R460SHT	2,4	252	6
R461SHT	3,2	258	6
RG465SHT *	2,0	246	6
RG460SHT*	2,4	252	6
RG461SHT*	3,2	258	6

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
282	245	194	23	31	33	141	245	254	260

M	N	P	R	S	T	U	V
315	306	197	185	157	27	4,7	12,9

Маска термопластическая Klarity, тип S-Type, модели R460-4ST, R461-4ST, RG460-4ST, RG461-4ST.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч с рамкой крепления типа S-Type, с рисунком перфорации для IMRT, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

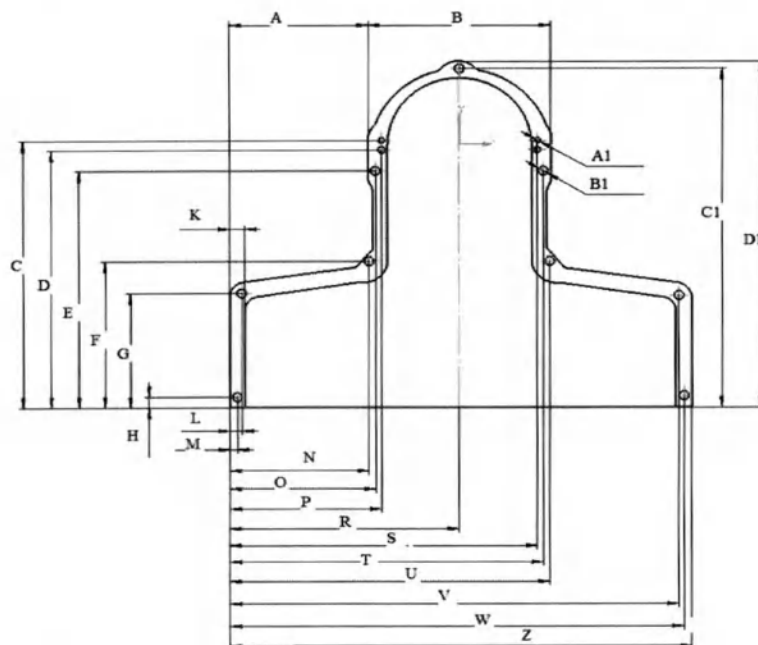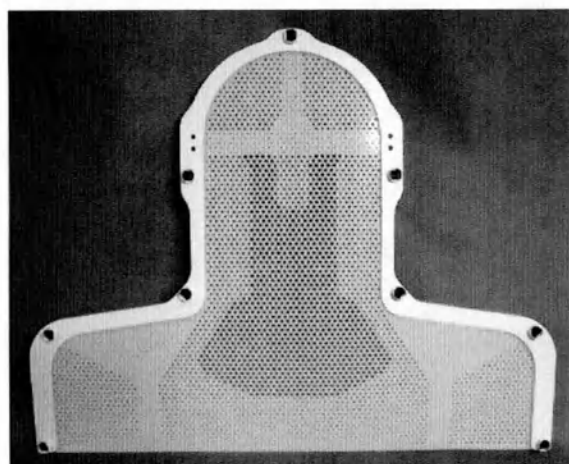

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R460-4ST	2,4	632	6
R461-4ST	3,2	658	6
RG460-4ST *	2,4	630	6
RG461-4ST *	3,2	655	6

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K
180	245	360	346	318	190	145	10	25

L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	Z	A1	B1	C1	D1
30	12	192	195	200	305	410	413	415	580	598	610	4,8	12,9	468	480

Маска термопластическая Klarity, тип S-Type, модели R460ST R461ST, RG460ST, RG461ST.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч с рамкой крепления типа S-Type с пинами, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

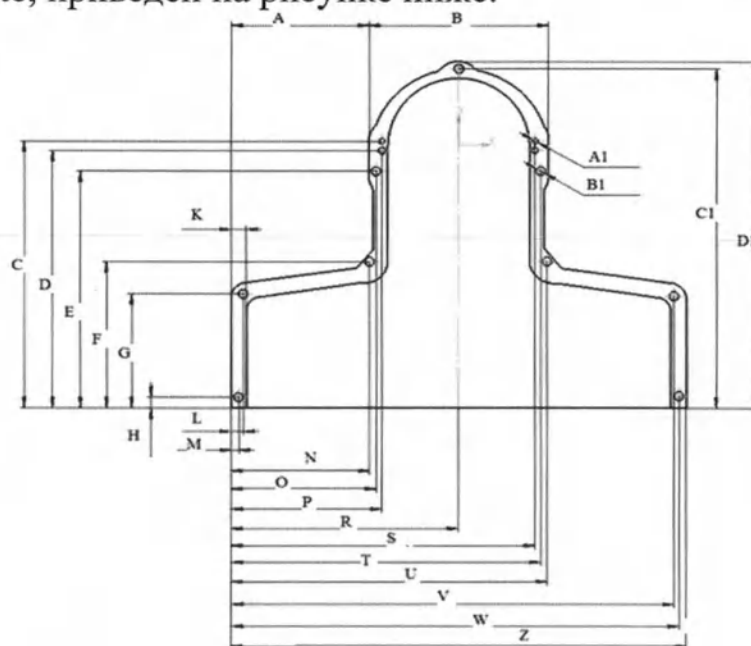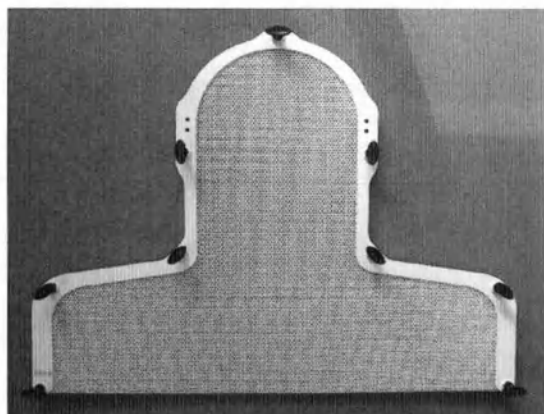

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R460ST	2,4	630	6
R461ST	3,2	655	6
RG460ST *	2,4	630	6
RG461ST*	3,2	655	6

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*)


Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O
180	245	360	346	318	190	145	10	25	30	12	192	195

P	R	S	T	U	V	W	Z	A1	B1	C1	D1
200	305	410	415	418	580	598	610	4,8	12,9	468	480

Маска термопластическая Klarity, тип S-Type, модели R470SH, R471SH, RG470SH, RG471SH.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, для многоразовой рамки типа S-Type, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

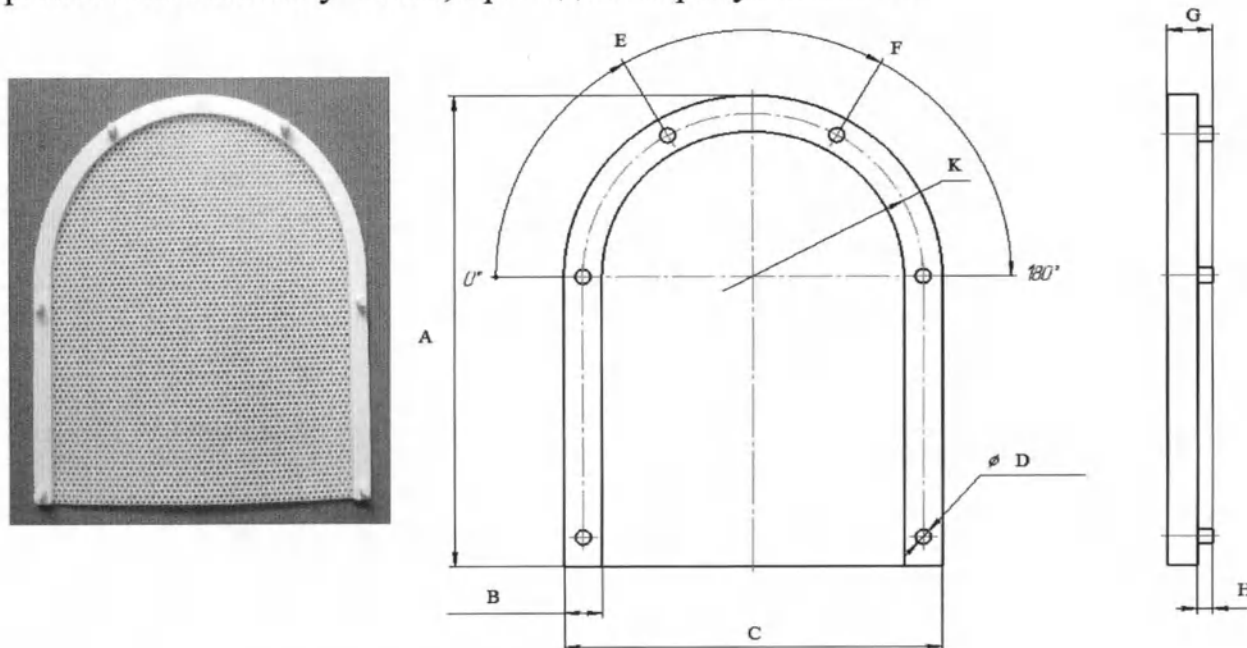

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R470SH	2,4	113	6
R471SH	3,2	124	6
RG470SH*	2,4	113	6
RG471SH*	3,2	124	6



Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K
230	12	214	6	63	63	13,5	8	6

Маска термопластическая Klarity, тип S-Type, модели R470S, R471S, RG470S, RG471S.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, для многоразовой рамки типа S-Type, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

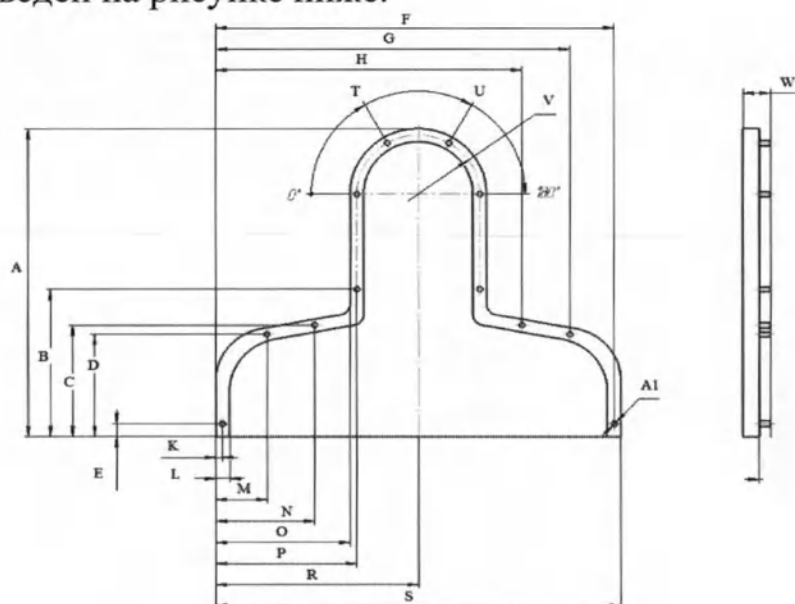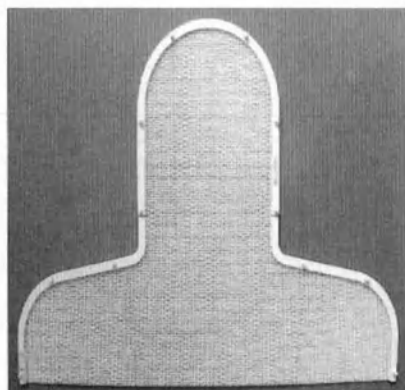

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R470S	2,4	298	6
R471S	3,2	304	6
RG470S*	2,4	298	6
RG471S*	3,2	304	6

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N
445	212	146	125	12	580	540	443	5	10	50	148

P	R	S	T	U	V	W	Z	A1
185	292	585	63	63	10	13,5	8	6

Маска термопластическая Klarity, тип S-Type, модели RG460-5SHT, RG461-5SHT.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с рамкой крепления типа S-Туре, выполненной из термопластика Klarity Green с удлиненной вставкой и рисунком перфорации для IMRT, приведен на рисунке ниже.

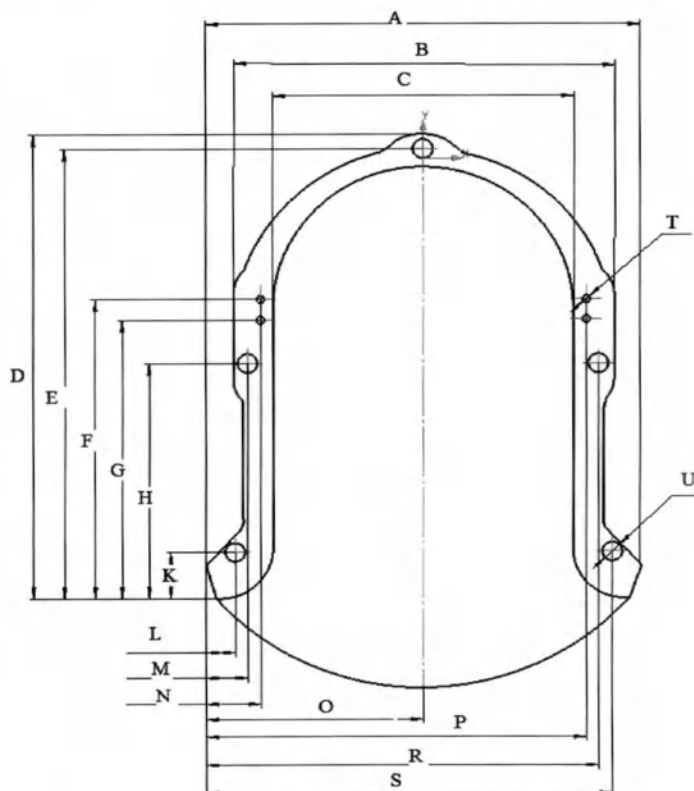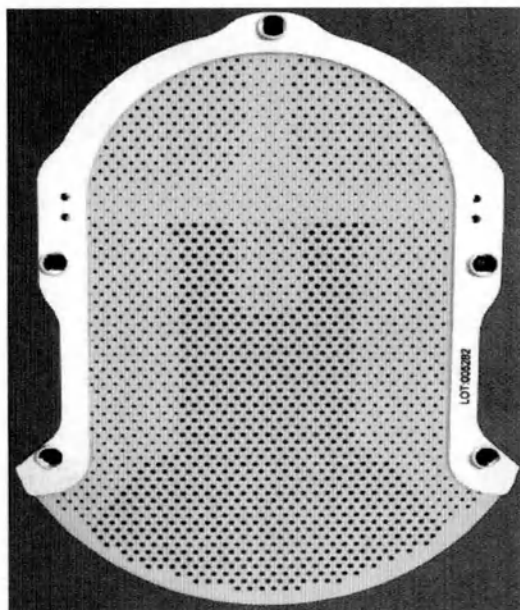

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG460-5SHT*	2,4	270	4
RG461-5SHT*	3,2	280	4

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K
282	245	194	315	306	197	185	157	27

L	M	N	O	P	R	S	T	U
23	31	33	141	245	254	260	4,7	12,9

Маска термопластическая Klarity, тип S-Type, модели RG460SC, RG461SC.

Внешний вид маски педиатрической термопластической для фиксации головы, шеи и плеч с рамкой крепления типа S-Type с пинами, выполненной из термопластика Klarity Green, приведен на рисунке ниже.

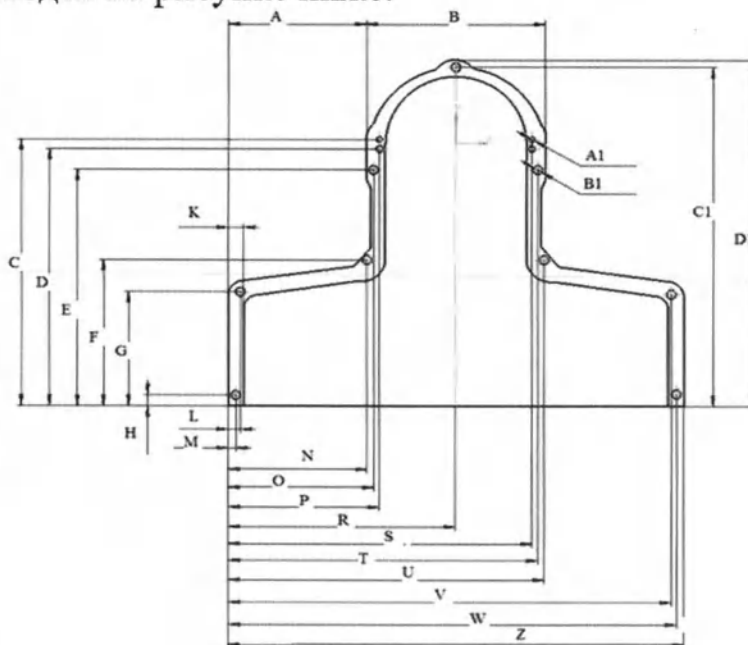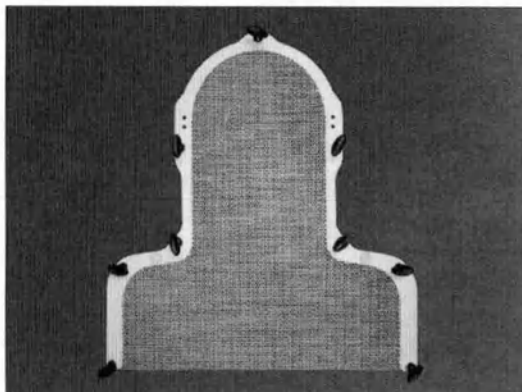

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG460SC*	2,4	520	6
RG461SC*	3,2	526	6

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры:

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	R
112	245	360	346	318	190	145	10	25	30	12	124	127	132	228

S	T	U	V	W	Z	A1	B1	C1	D1
324	329	331	426	444	456	4,8	12,9	468	480

Маска термопластическая Klarity, тип S-Type, модель R461-8SHTF.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с рамкой крепления типа S-Type, с рисунком перфорации для IMRT, с отверстием для лица пациента, выполненной из термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

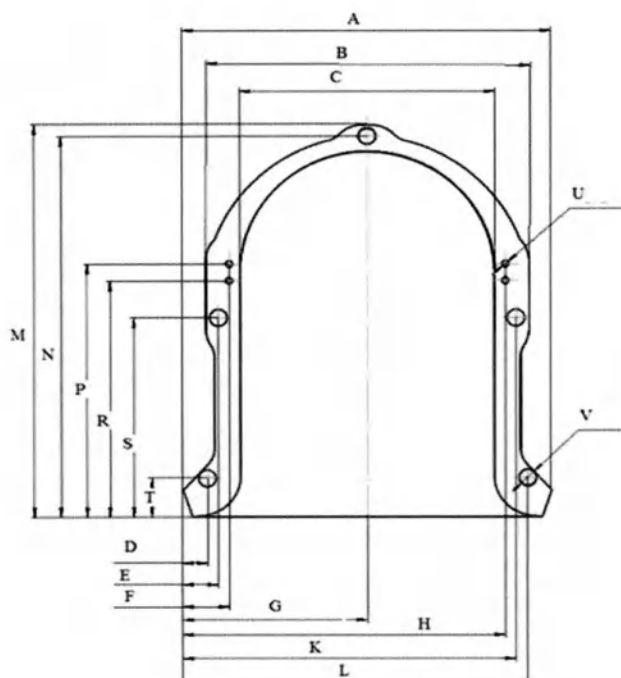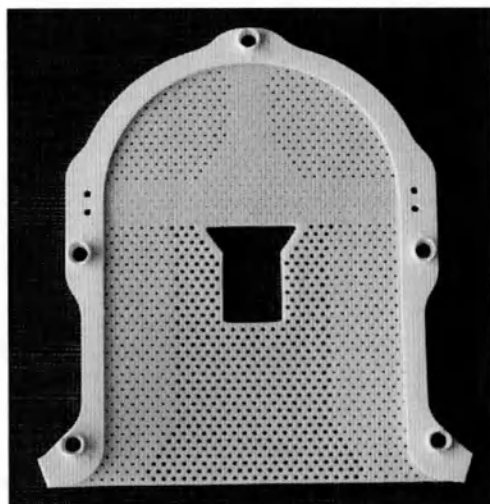

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R461-8SHTF	3,2	265	6



Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K
282	245	194	23	31	33	141	245	254

L	M	N	P	R	S	T	U	V
260	315	306	197	185	157	27	4,7	12,9

Маска термопластическая Klarity, тип S-Туре, модель R461-8STF.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч с рамкой крепления типа S-Туре, с рисунком перфорации для IMRT, с отверстием для лица пациента, выполненной из термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

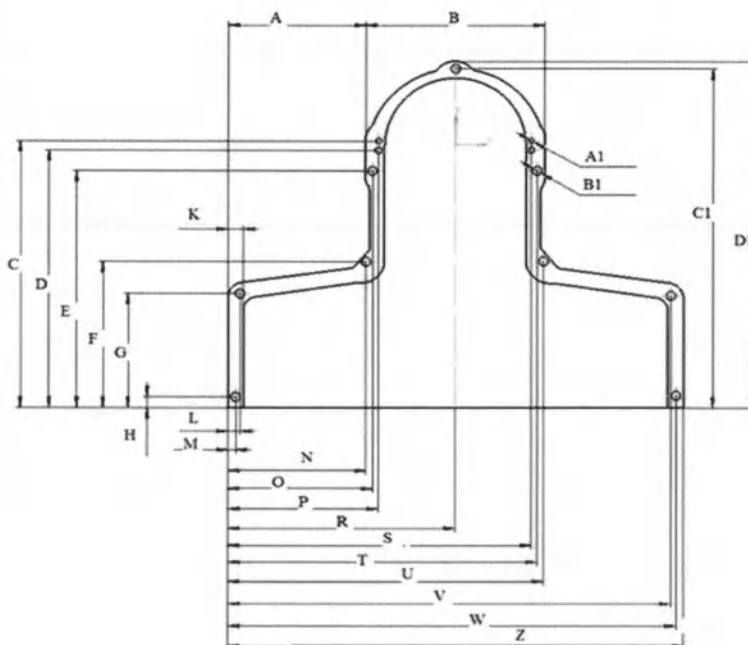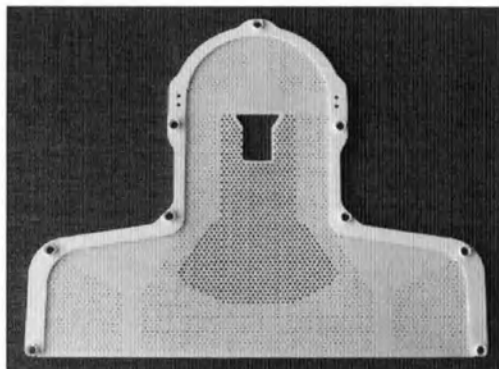

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R461-8STF	3,2	658	6



Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O
180	245	360	346	318	190	145	10	25	30	12	192	195

P	R	S	T	U	V	W	Z	A1	B1	C1	D1
200	205	305	418	415	580	598	610	4,8	12,9	468	480

Маска термопластическая Klarity, тип S-Туре, модели RG460-8SHTM, RG461-8SHTM.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой крепления типа S-Туре, с рисунком перфорации для IMRT, с отверстием для глаз и рта пациента, выполненной из термопластика Klarity Green, приведен на рисунке ниже.

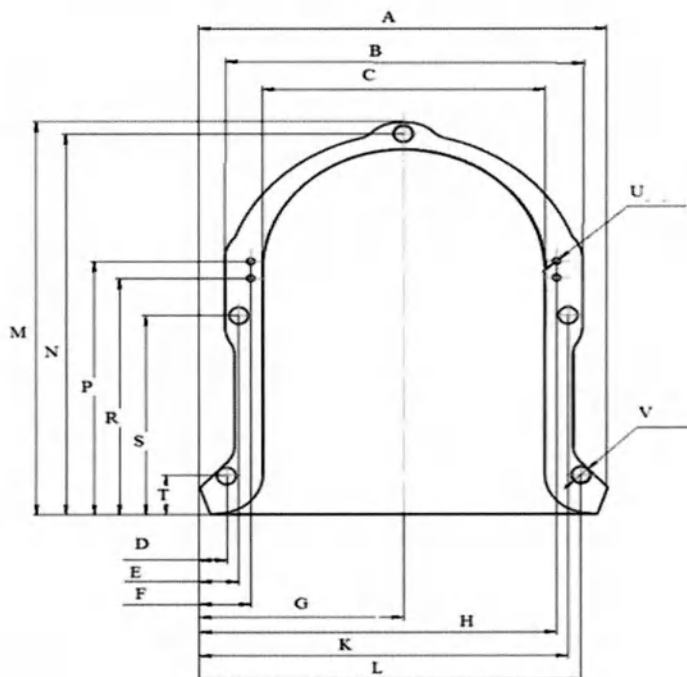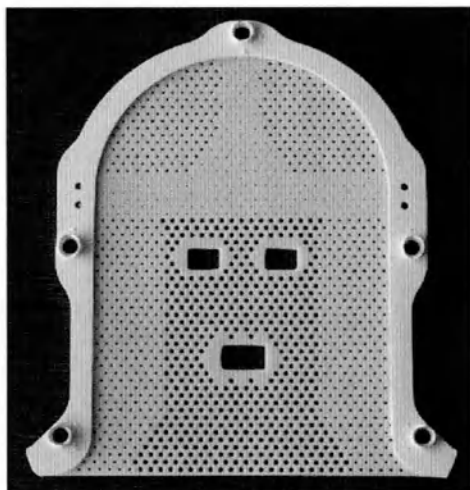

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG460-8SHTM*	2,4	255	6
RG461-8SHTM*	3,2	262	6

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K
282	245	194	23	31	33	141	245	254

L	M	N	P	R	S	T	U	V
260	315	306	197	185	157	27	4,7	12,9

Маска термопластическая Klarity, тип S-Type, модели RG460-8STEM, RG461-8STEM.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч, с рамкой крепления типа S-Type, с рисунком перфорации для IMRT, с отверстием для глаз и рта пациента, выполненной из термопластика Klarity Green, приведен на рисунке ниже.

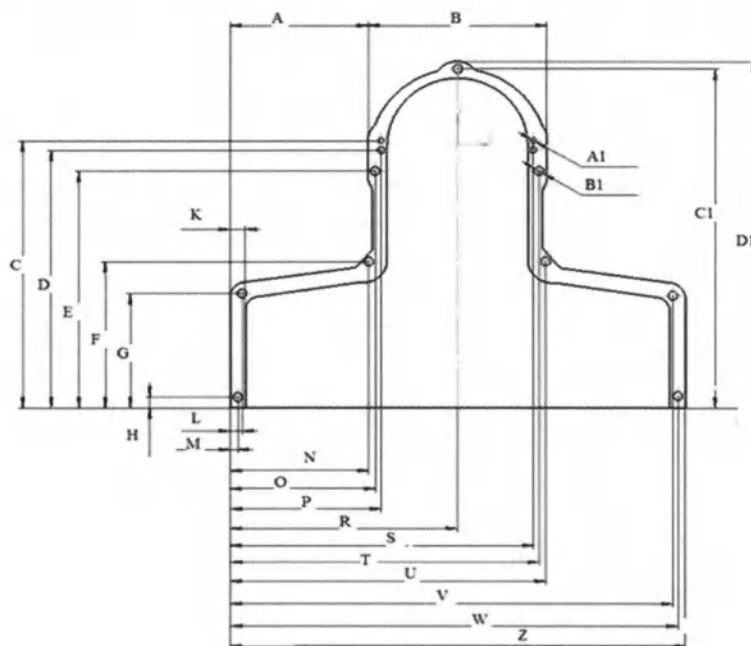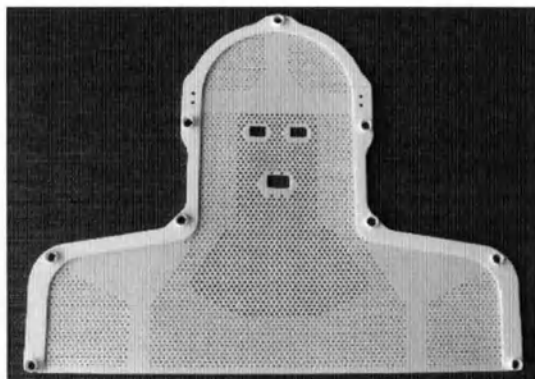

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт.
RG460-8STEM *	2,4	633	6
RG461-8STEM*	3,2	640	6

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).


Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O
180	245	360	346	318	190	145	10	25	30	12	192	195

P	R	S	T	U	V	W	Z	A1	B1	C1	D1
200	205	305	418	415	580	598	610	4,8	12,9	468	480

Маска термопластическая Klarity, тип S-Туре, модель RB461-3210SHT

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с рамкой крепления типа S-Туре, выполненной из термопластика Klarity Blue, приведен на рисунке ниже.

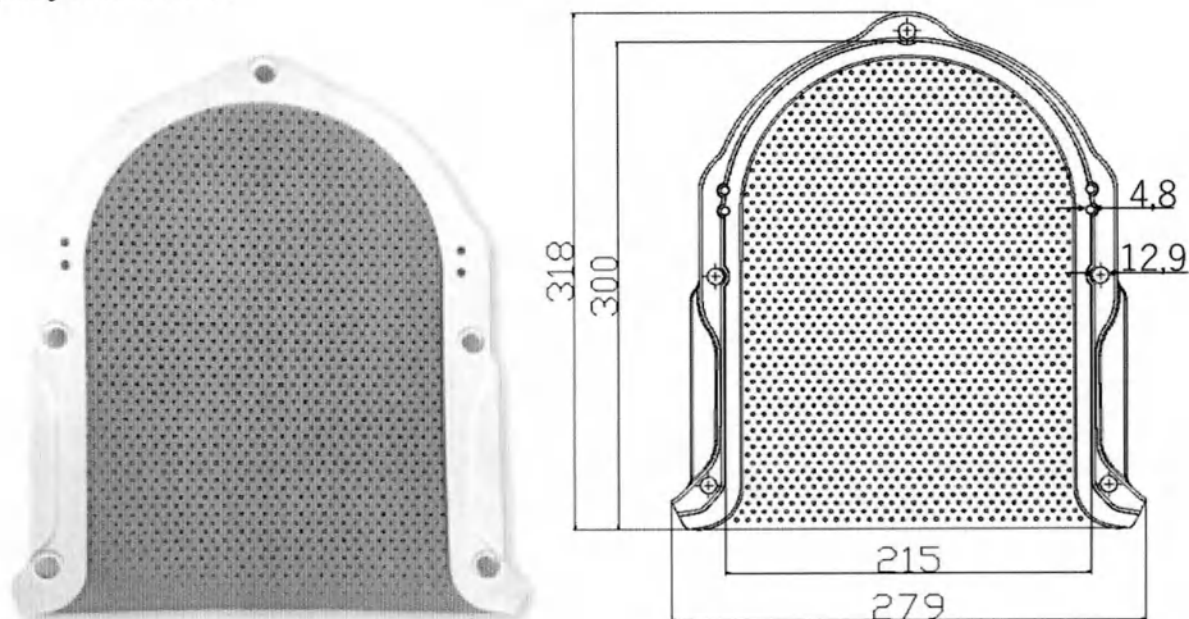


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB461-3210SHT	3,3	265	6

Маска термопластическая Klarity, тип S-Type, модель RB461-3210ST

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч, с рамкой крепления типа S-Type, выполненной из термопластика Klarity Blue, приведен на рисунке ниже.

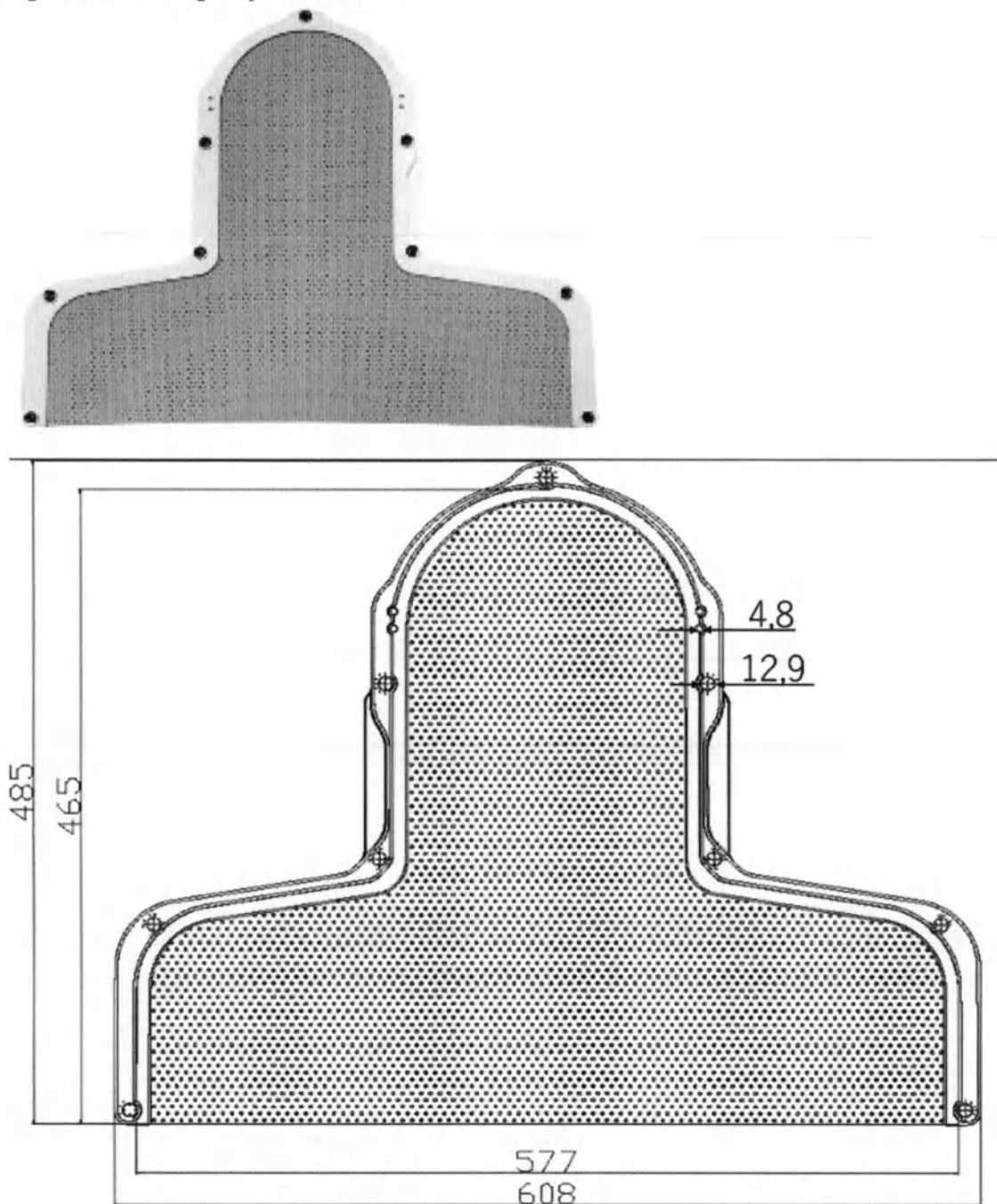


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB461-3210ST	3,3	668	6

Маска термопластическая Klarity, тип S-Туре, модель RB461-6SHTF

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с рамкой крепления типа S-Туре, с удлиненной вставкой, и рисунком перфорации для IMRT Open Face (отверстие для лица), выполненной из термопластика Klarity Blue, приведен на рисунке ниже.

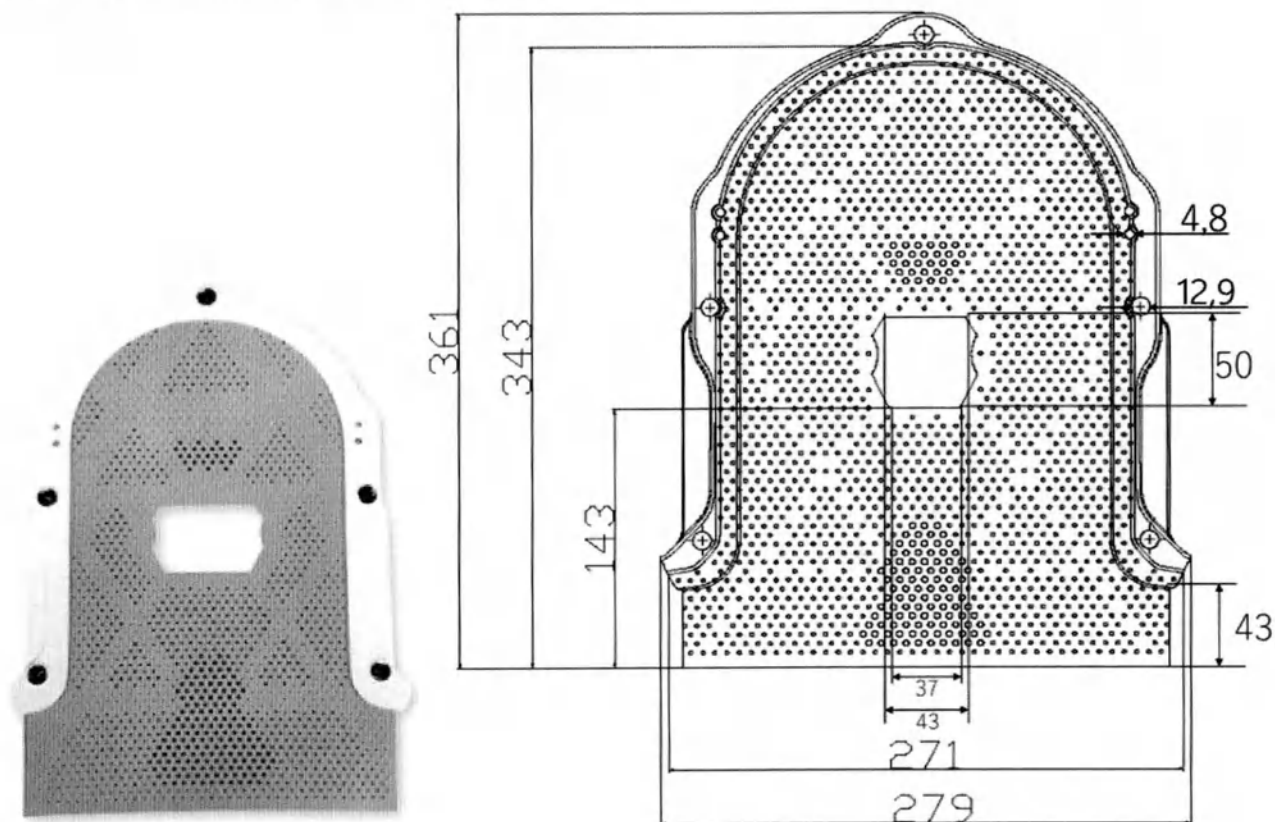


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB461-6SHTF	3,3	312	6

Маска термопластическая Klarity, тип S-Type, модель RB461-6SHTM

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с рамкой крепления типа S-Type, и рисунком перфорации для IMRT Open EM (отверстия для глаз и рта), выполненной из термопластика Klarity Blue, приведен на рисунке ниже.


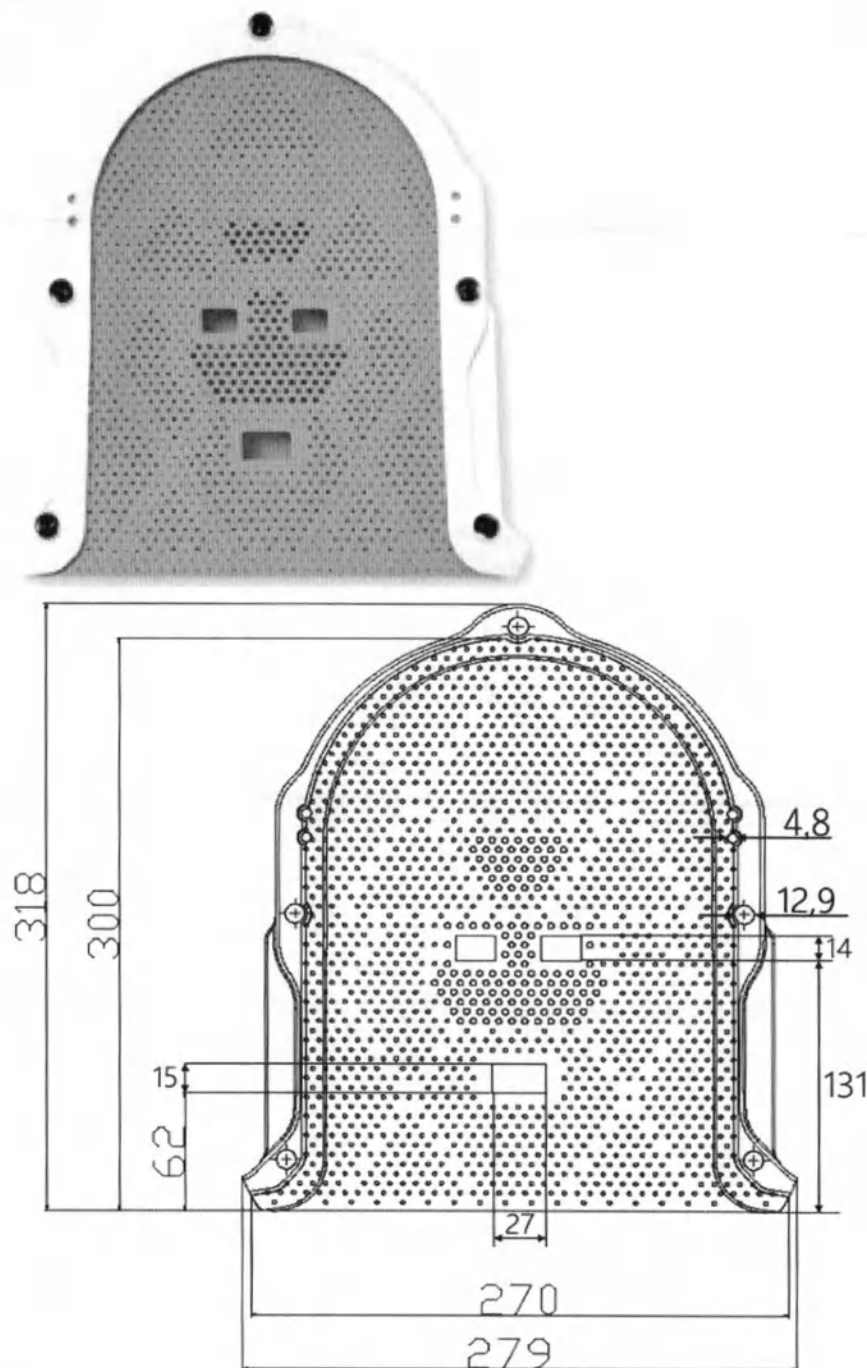


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB461-6SHTM	3,3	262	6

Маска термопластическая Klarity, тип S-Type, модель RB461-6STF

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч, с рамкой крепления типа S-Type, и рисунком перфорации для IMRT Open Face (отверстие для лица), выполненной из термопластика Klarity Blue, приведен на рисунке ниже.

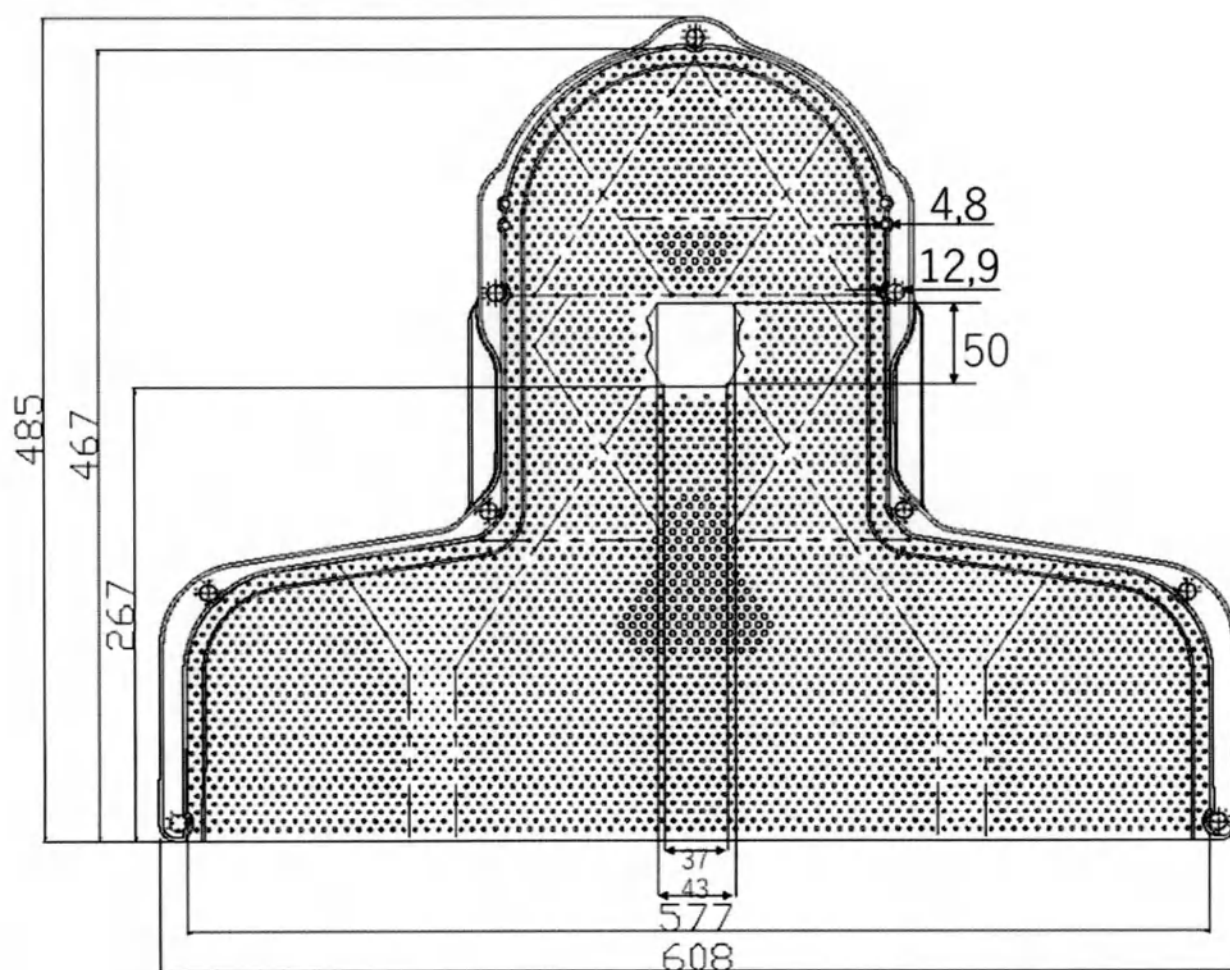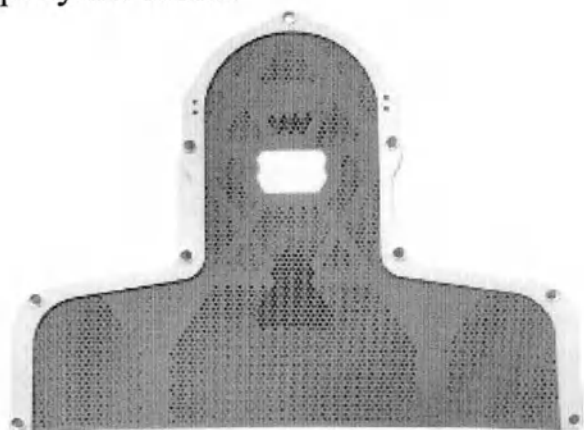


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB461-6STF	3,3	664	6

Маска термопластическая Klarity, тип S-Type, модель RB461-6STEM

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч, с рамкой крепления типа S-Type, и рисунком перфорации для IMRT Open EM (отверстия для глаз и рта), выполненной из термопластика Klarity Blue, приведен на рисунке ниже.

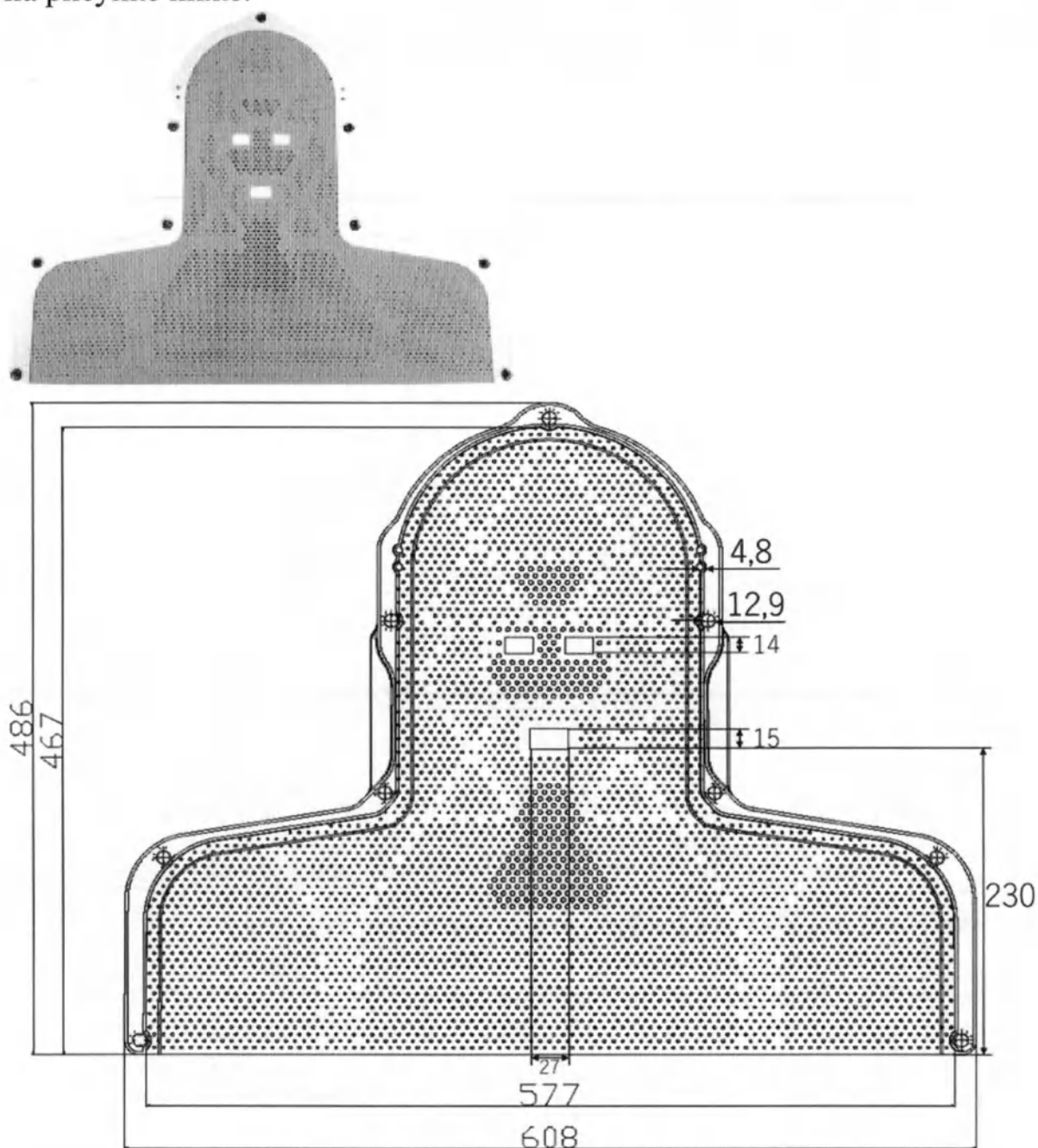

Основные технические характеристики:




Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB461-6STEM	3,3	665	6

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модели RD301-2022 RD301-3242.

Маска термопластическая типа O-Type с двухточечным креплением

Внешний вид маски термопластической для фиксации груди, с рамкой крепления типа O-Type выполненной из термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

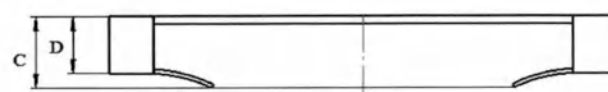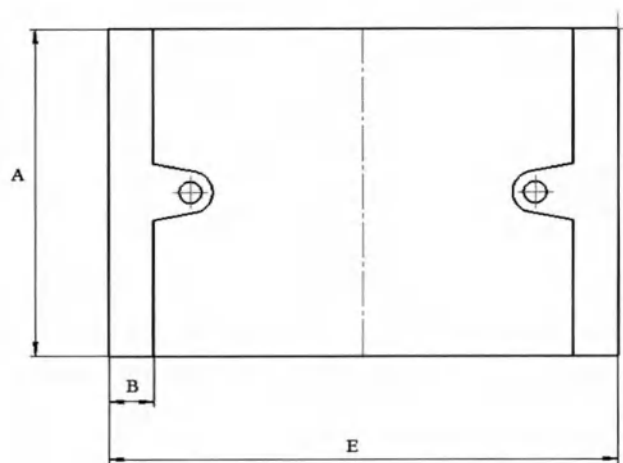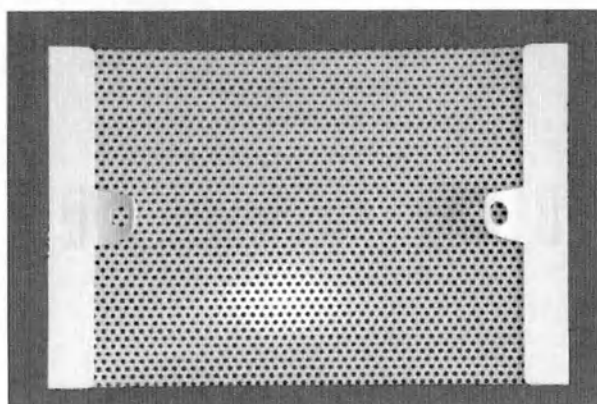

Основные технические характеристики:


Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RD301-2022	2,0	125	10
RD301-3242	3,2	136	10

Размеры (мм) :

A	B	C	D	E
179	29	32	11,2	340

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модели RDG105-20A, RDG105-24A, RDG105-32A.

Маска термопластическая типа O-Type с трехточечным креплением. Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой крепления типа O-Type, выполненной из термопластика Klarity Green с рисунком перфорации для IMRT, приведен на рисунке ниже.

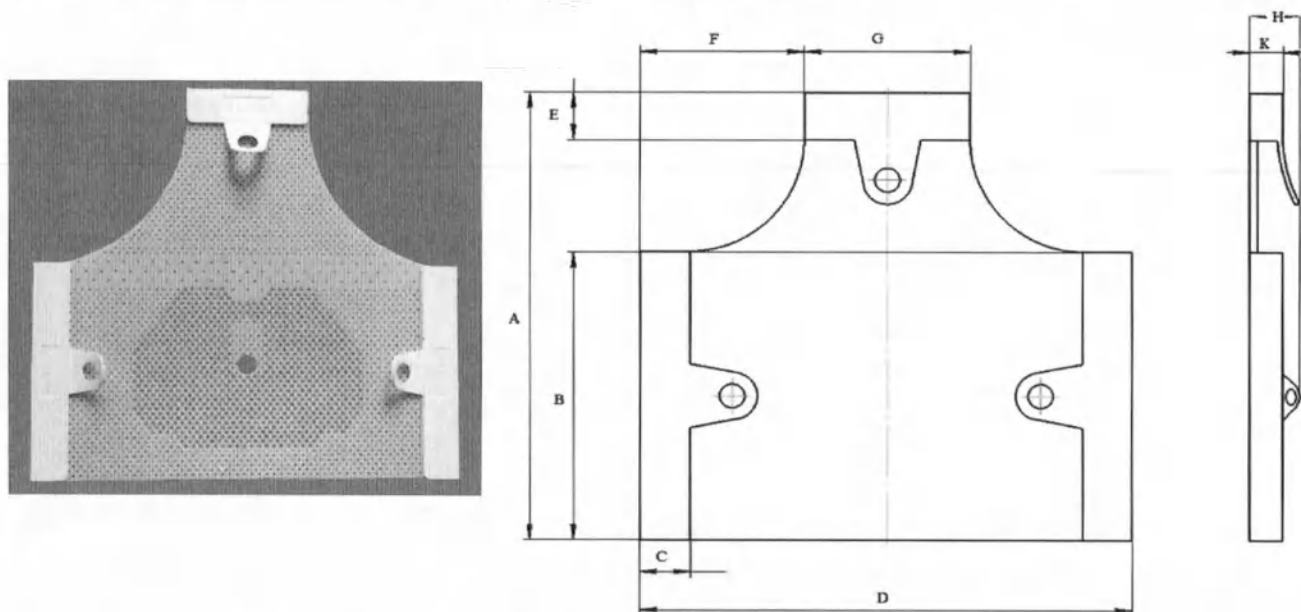

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, гр	Упаковка, шт
RDG105-20A*	2,0	195	10
RDG105-24A*	2,4	202	10
RDG105-32A*	3,2	212	10


Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*)

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K
325	179	29	340	29	120	99	32	11,2

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модели RD105-1636N, RD105-2015N, RD105-2022N, RD105-2036N, RD105-2415N, RD105-2422N, RD105-2436N, RD105-3242N, RDG105-2015N, RDG105-2022N, RDG105-2422N.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой крепления типа O-Type, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

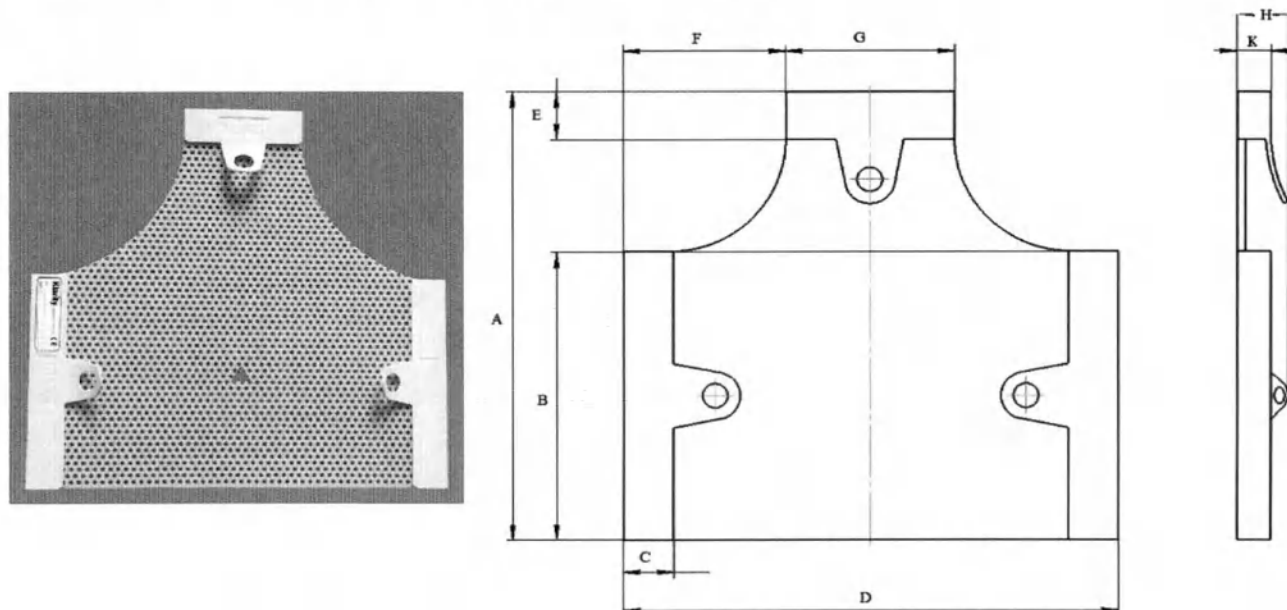

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RD105-1636N	1,6	178	10
RD105-2015N	2,0	192	10
RD105-2022N	2,0	186	10
RD105-2036N	2,0	180	10
RD105-2415N	2,4	192	10
RD105-2422N	2,4	186	10
RD105-2436N	2,4	180	10
RD105-3242N	3,2	195	10
RDG105-2015N*	2,0	185	10
RDG105-2022N*	2,0	180	10
RDG105-2422N*	2,4	206	10



Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K
325	179	29	340	29	120	99	32	11,2

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модели RDG107-24A, RDG107-32A

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой крепления типа O-Type, выполненной из термопластика Klarity Green, с удлиненной вставкой и рисунком перфорации для IMRT, приведен на рисунке ниже.

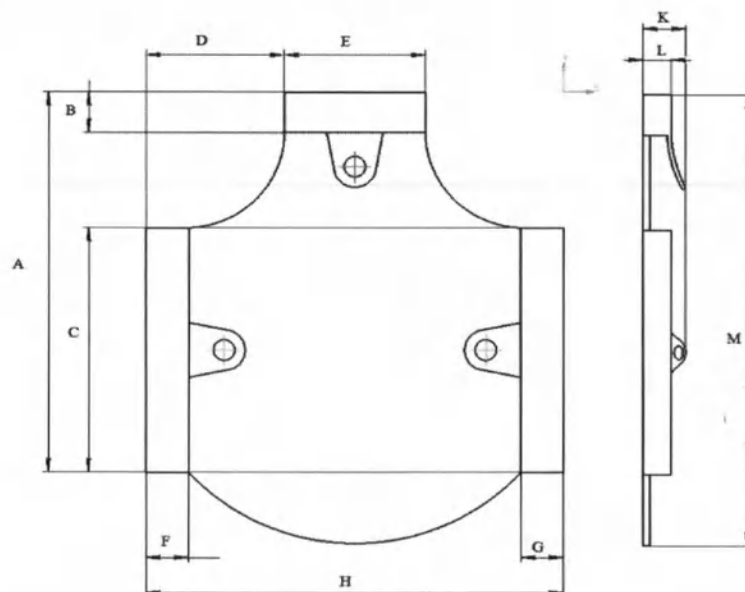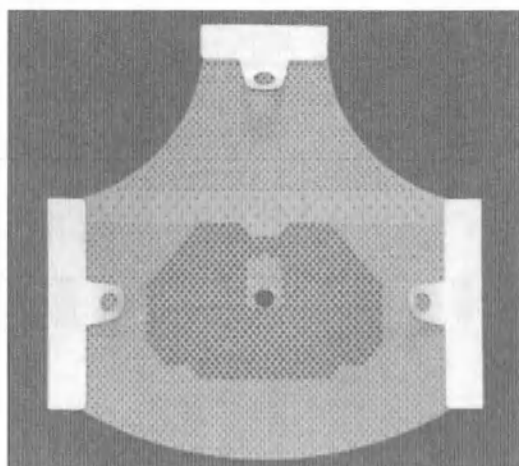

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RDG107-24A*	2,4	216	10
RDG107-32A*	3,4	222	10



Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M
325	29	179	120	99	29	29	340	32	11,2	385

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модели RD107-2015N, RD107-2022N, RD107-2422N, RD107-3242N, RDG107-2015N, RDG107-2022N, RDG107-2422N, RDG107-2436N, RDG107-3242N.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой крепления типа O-Type, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, с удлиненной вставкой, приведен на рисунке ниже.

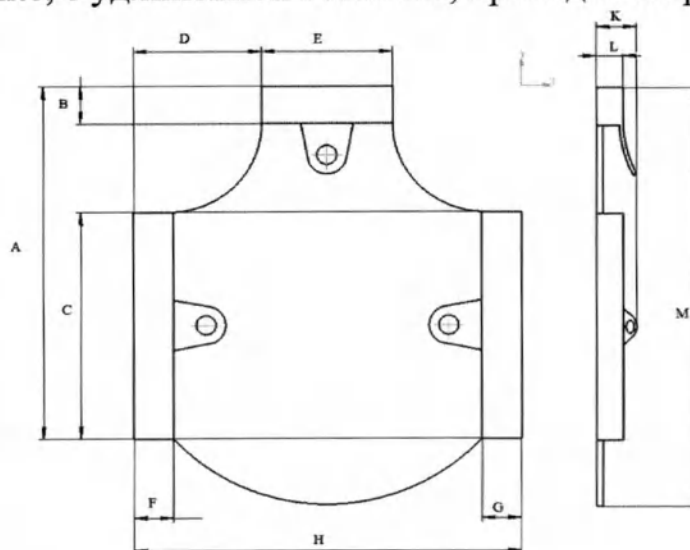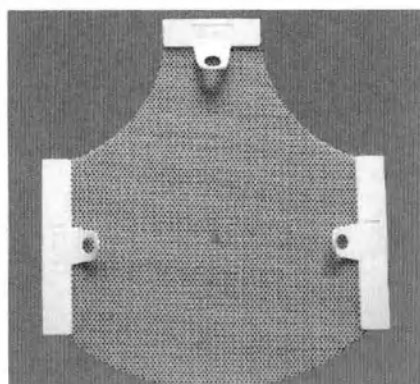

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RD107-2015N	2,0	195	10
RD107-2022N	2,0	187	10
RD107-2422N	2,4	196	10
RD107-3242N	3,2	210	10
RDG107-2015N*	2,0	195	10
RDG107-2022N*	2,0	187	10
RDG107-2422N*	2,4	196	10
RDG107-2436N*	2,4	203	10
RDG107-3242N*	3,2	210	10


Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M
325	29	179	120	99	29	29	340	32	11,2	385

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модель RD104-2022N.

Внешний вид маски термопластической педиатрической для фиксации головы, с рамкой крепления типа O-Type, выполненной из термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

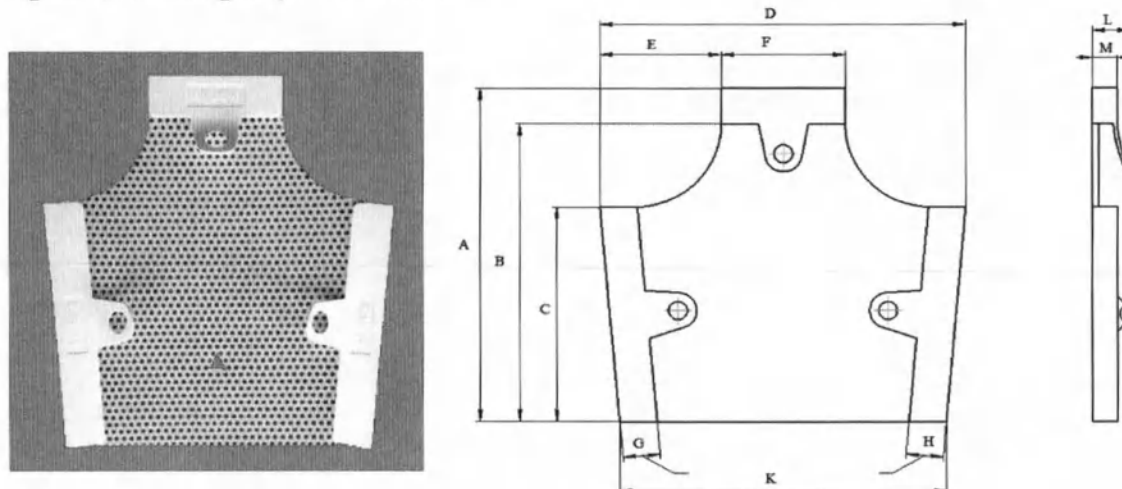

Основные технические характеристики:



Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RD104-2022N	2,0	256	10

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M
270	240	180	260	80	98	29,5	29,5	230	32	11,2

Маска термопластическая Klarity, тип O-Туре, модель RDG206-24A, RDG206-32A.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы и шеи, с рамкой крепления типа O-Туре, выполненной из термопластика Klarity Green, с рисунком перфорации для IMRT, приведен на рисунке ниже.

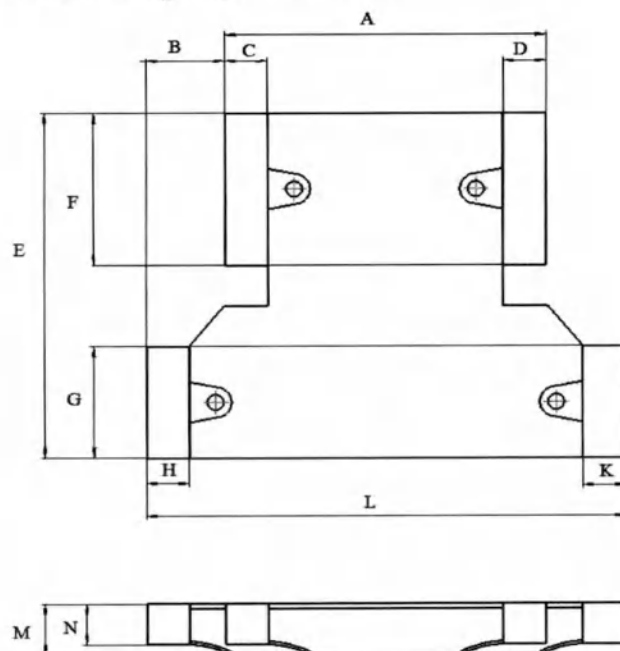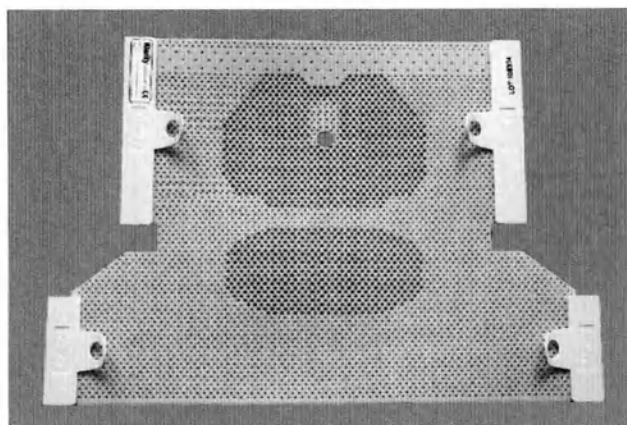

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RDG206-24A*	2,4	230	10
RDG206-32A*	3,2	242	10



Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N
362	64	29	29	345	180	100	29	29	490	11,2	32

Маска термопластическая Klarity, тип O-Туре, модели RD206-2022N, RD206-2422N, RD206-2436N.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы и шеи, с рамкой крепления типа O-Туре, выполненной из термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

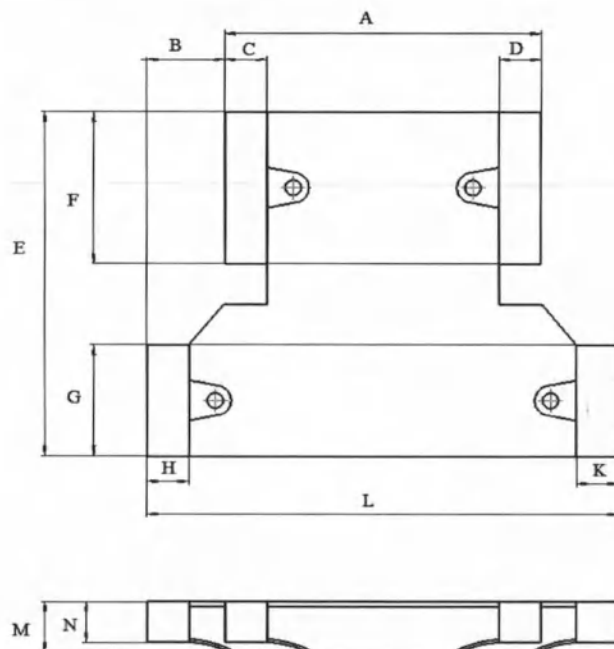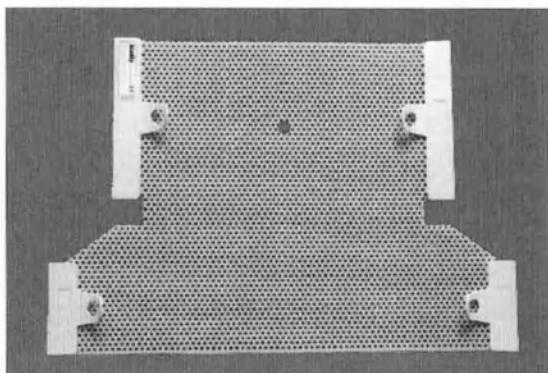

Основные технические характеристики:



Модель	Толщина термопластик а, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RD206-2022N	2,0	230	10
RD206-2422N	2,4	245	10
RD206-2436N	2,4	238	10

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N
362	64	29	29	345	180	100	29	29	490	11,2	32

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модель RD202-2022N

Внешний вид маски термопластической педиатрической для фиксации головы и шеи, с рамкой крепления типа O-Type, выполненной из термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

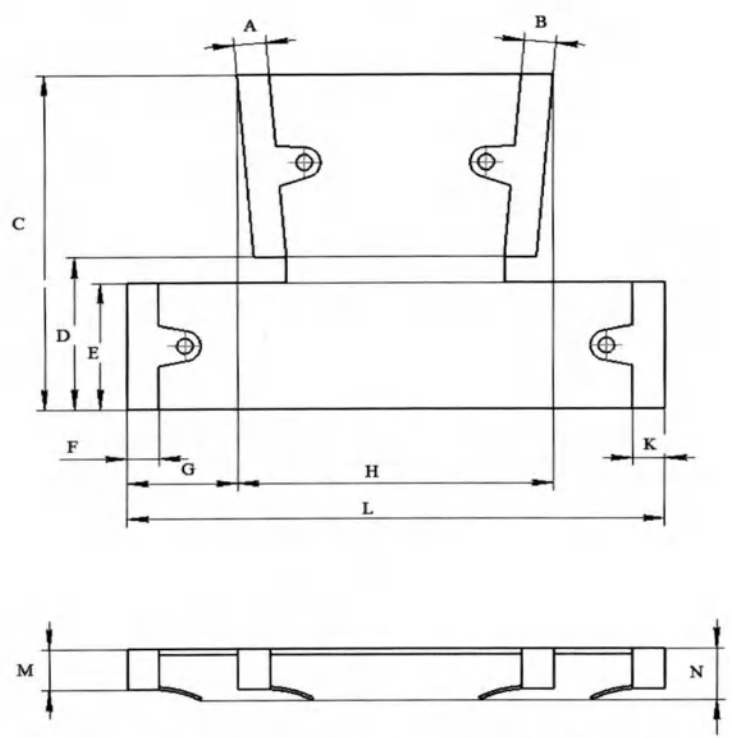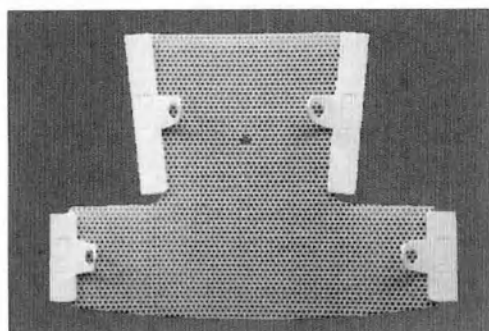

Основные технические характеристики:



Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RD202-2022N	2,0	356	10

Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N
29	29	312	136	98	29	172	260	29	430	32	11,2

Маска термопластическая Klarity, тип O-Туре, модели RD901-2436, RD901-3242.

Внешний вид маски термопластической для фиксации таза, с рамкой крепления типа O-Туре, выполненной из термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

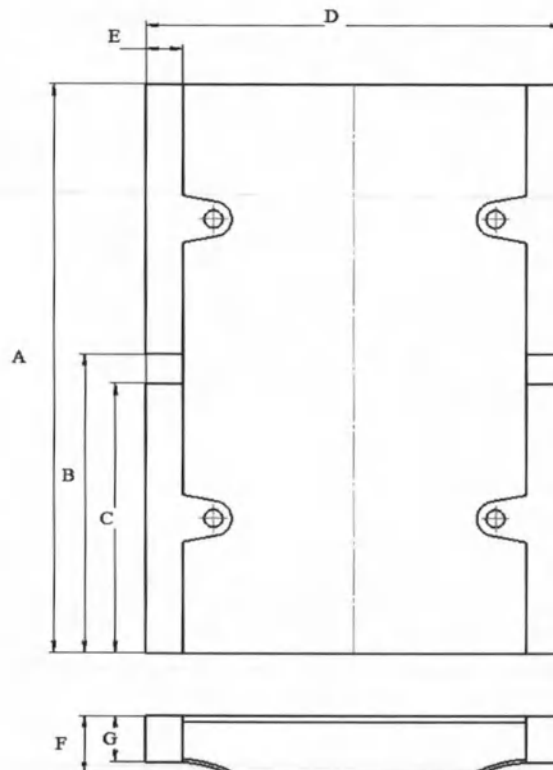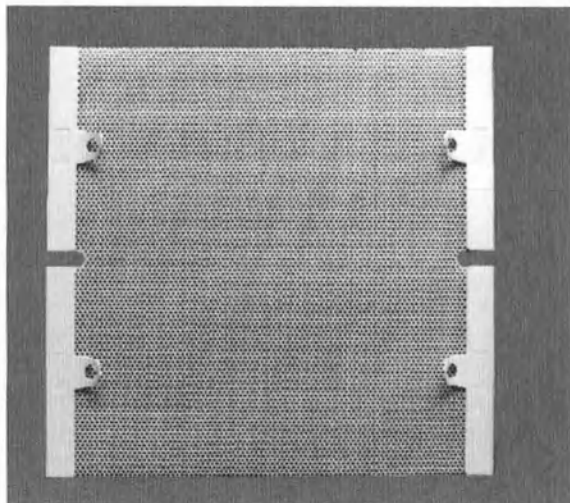

Основные технические характеристики:



Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RD901-2436	2,4	246	4
RD901-3242	3,2	250	4

Размеры:

A	B	C	D	E	F	G
480	250	230	465	30	32	11,2

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модели RD207-2022N, RD207-2422N, RD207-3242N, RDG207-2022N, RDG207-3242N.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч, с рамкой крепления типа O-Type, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

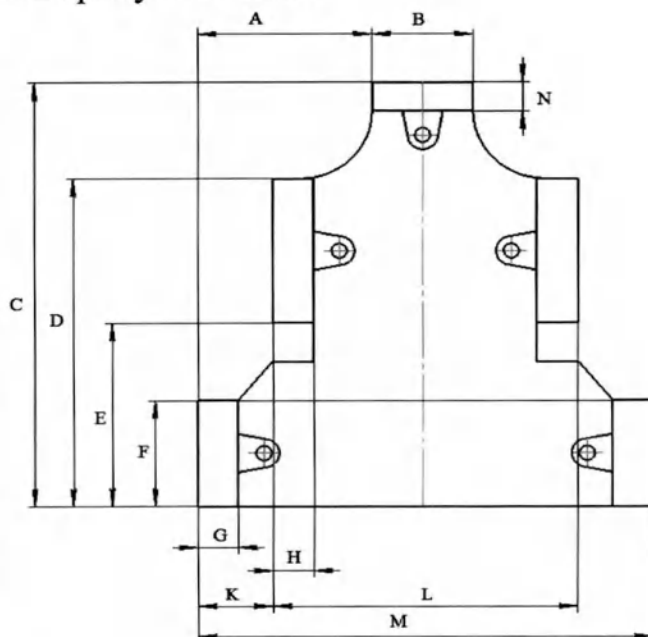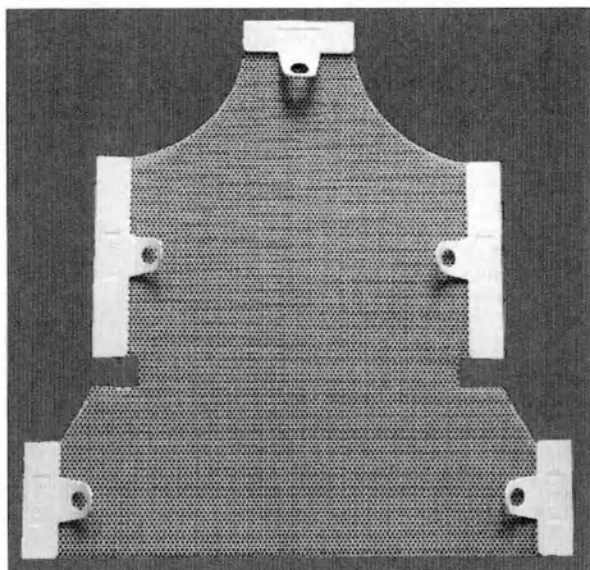

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RD207-2022N	2,0	422	10
RD207-2422N	2,4	435	10
RD207-3242N	3,2	445	10
RDG207-2022N*	2,0	420	10
RDG207-3242N*	3,2	442	10



Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N
166	98	480	350	170	98	29	29	57	350	456	29

Маска термопластическая Klarity, тип O-Туре, модели RDG207-24A, RDG207-32A.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч, с рамкой крепления типа O-Туре, выполненной из термопластика Klarity Green, с рисунком перфорации для IMRT, приведен на рисунке ниже.

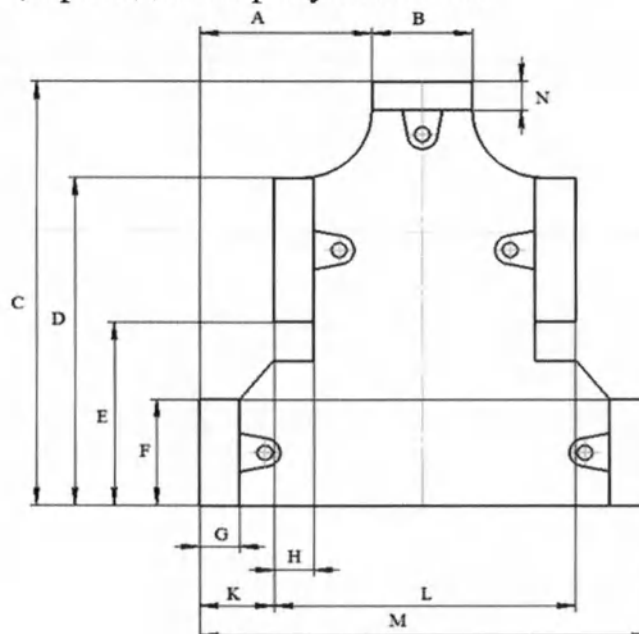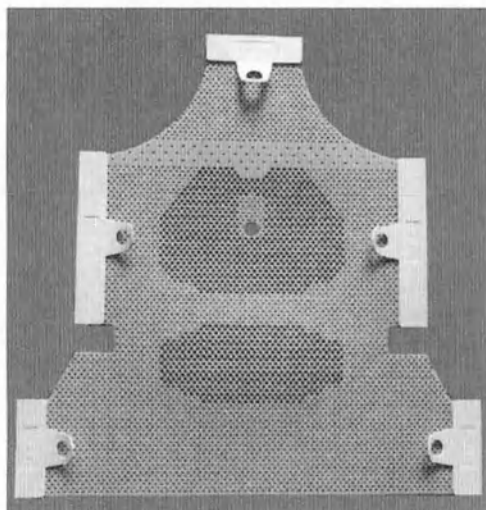

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RDG207-24A*	2,4	430	10
RDG207-32A*	3,2	446	10



Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N
166	98	480	350	170	98	29	29	57	350	456	29

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модель RD204-2022N.

Внешний вид маски термопластической педиатрической для фиксации головы, шеи и плеч, с рамкой крепления типа O-Type, выполненной из термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

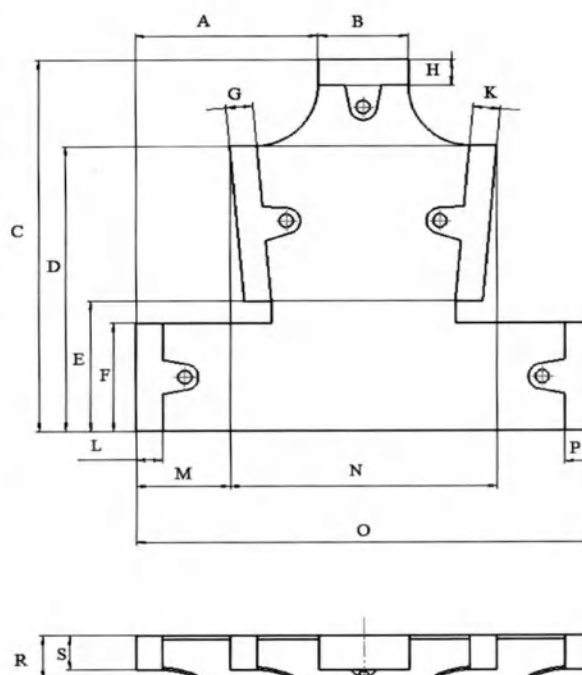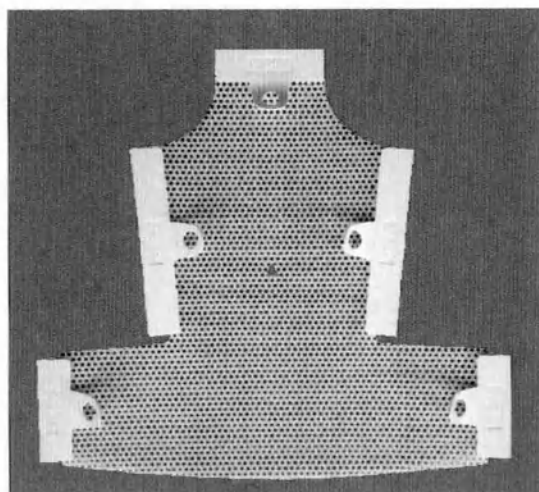

Основные технические характеристики:



Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RD204-2022N	2,0	395	10

Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	R	S
165	98,3	412	312	136	98	29	29	29	29	172	260	430	29	11,2	32

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модель RD401L-3242.

Внешний вид маски термопластической с открытым пахом для фиксации таза, с рамкой крепления типа O-Type, выполненной из термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

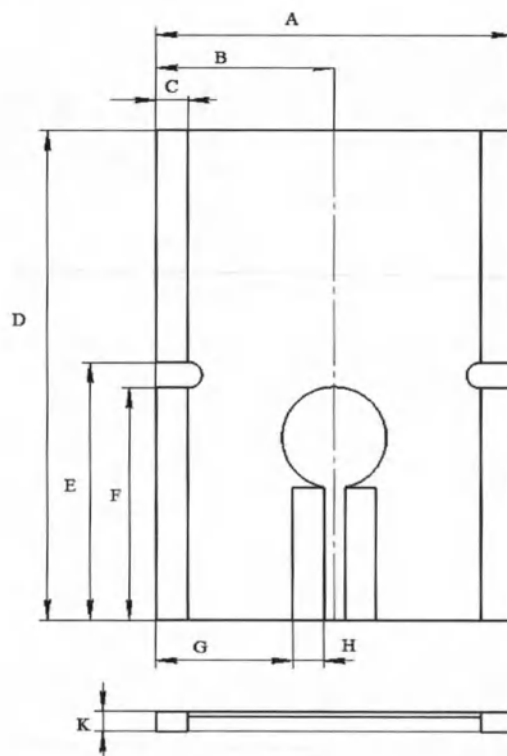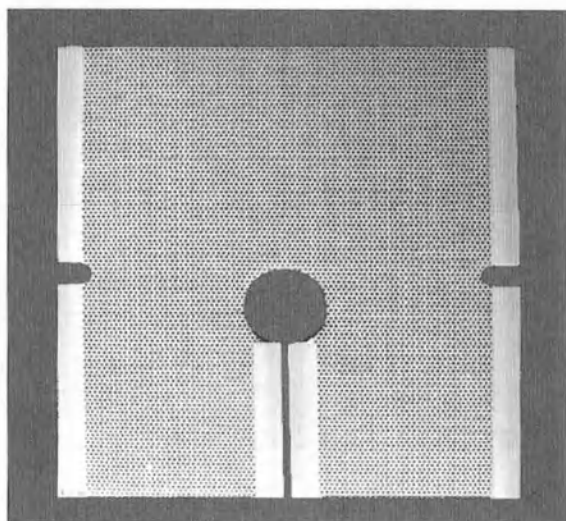

Основные технические характеристики:


Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RD401L-3242	3,2	650	1

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K
465	232,5	30	480	250	230	230	30	11,2

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модель RDLG105-24AF

Внешний вид маски термопластической для головы с рамкой крепления типа O-Type и рисунком перфорации для IMRT Open Face (отверстие для лица), с 3-х точечным креплением, выполненной из термопластика Klarity Lite Green, приведен на рисунке ниже.


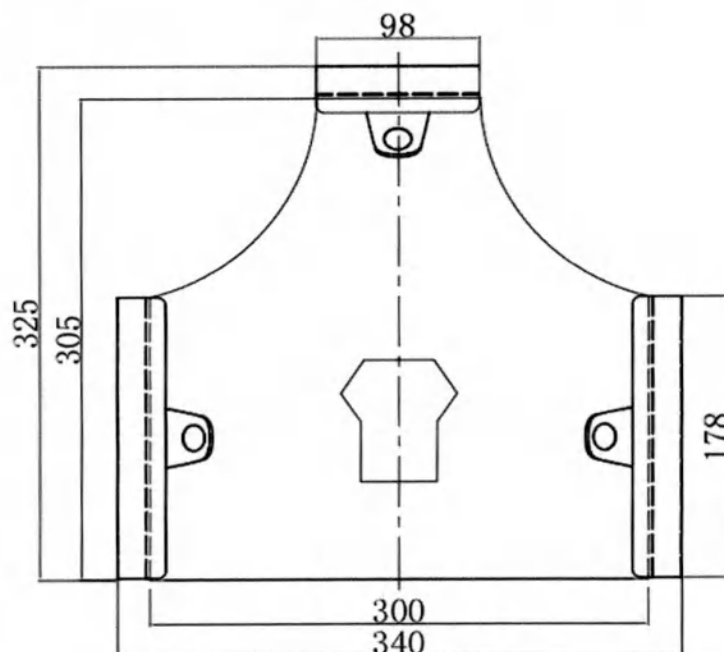


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RDLG105-24AF	2,4	202	10

Маска термопластическая Klarity, тип O-Tуре, модель RDLG207-24AF

Внешний вид маски термопластической для головы, плеч и шеи с рамкой крепления типа O-Tуре и рисунком перфорации для IMRT Open Face (отверстие для лица), с 5-ти точечным креплением, выполненной из термопластика Klarity Lite Green, приведен на рисунке ниже.

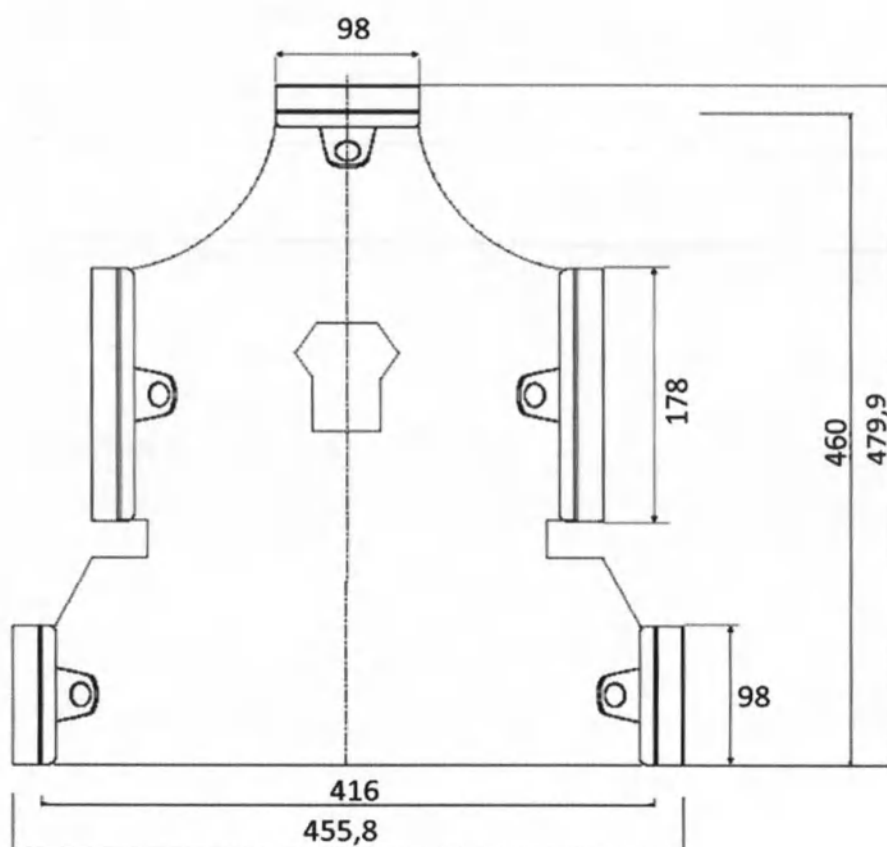
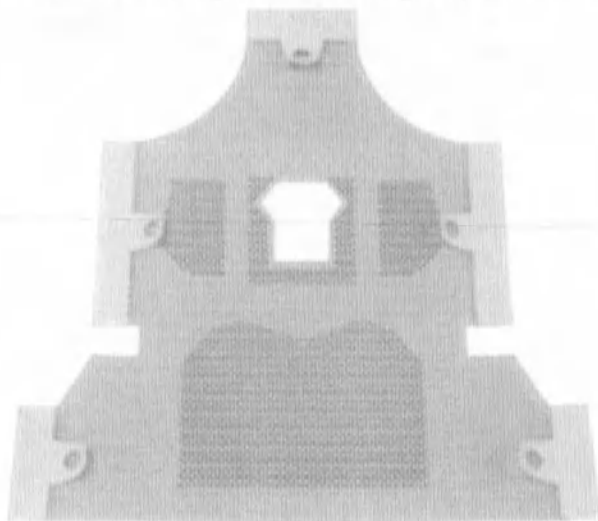


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RDLG207-24AF	2,4	396	10

Маска термопластическая Klarity, тип O-Туре, модель RDLG107-2412C

Внешний вид маски термопластической для головы с рамкой крепления типа O-Туре с вставкой с закругленным краем и отверстием для носа, с 3-х точечным креплением, выполненной из термопластика Klarity Lite Green, приведен на рисунке ниже.

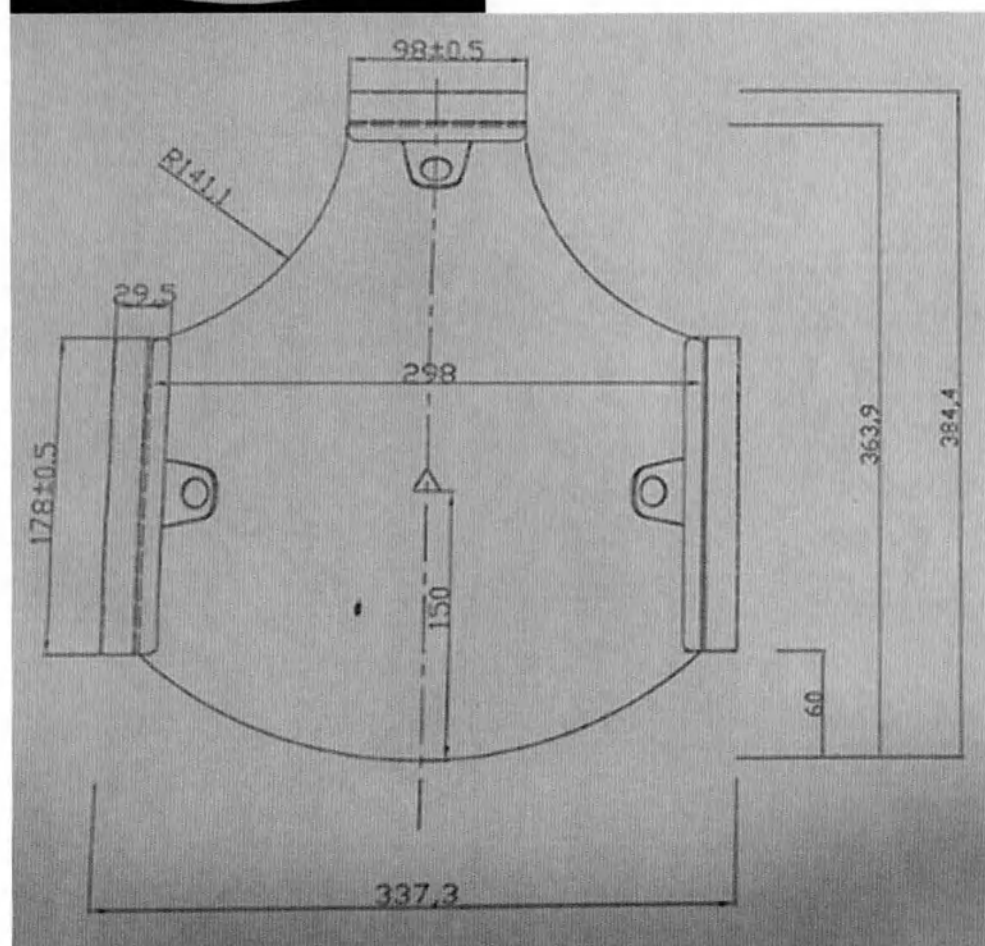
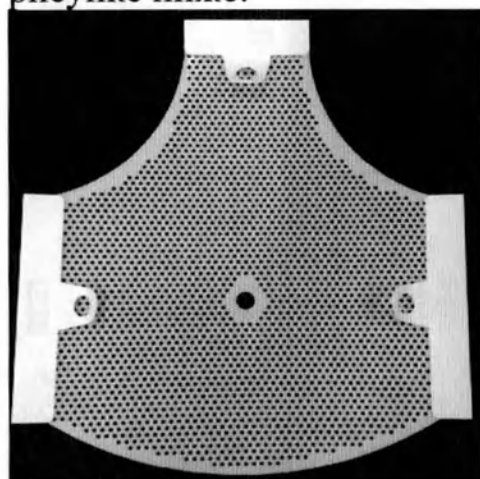


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RDLG107-2412C	2,4	196	10

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модель RDLG202-2412C

Внешний вид маски термопластической детской для головы, шеи и плеч с рамкой крепления типа O-Type со вставкой с отверстием для носа, с 4-х точечным креплением, выполненной из термопластика Klarity Lite Green, приведен на рисунке ниже.

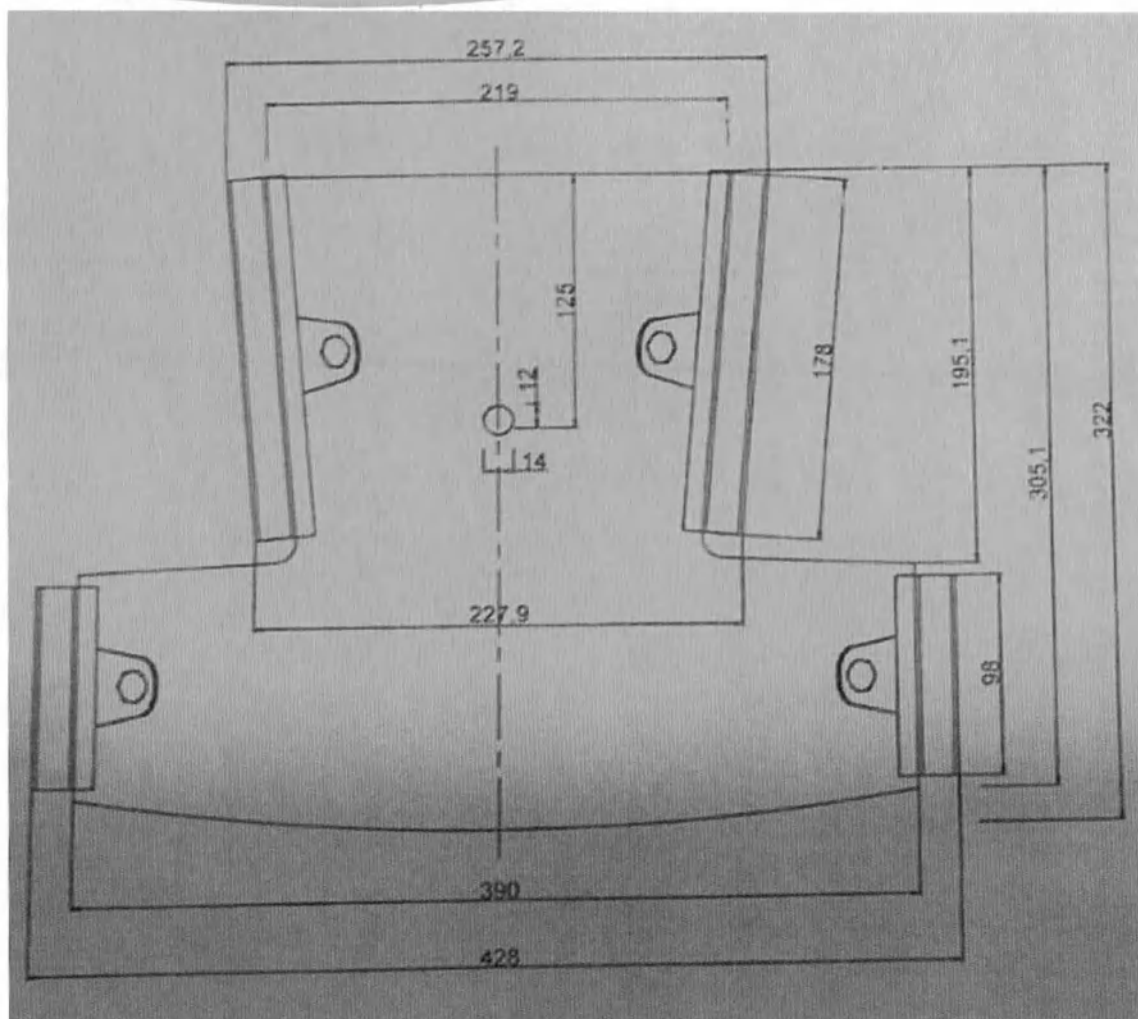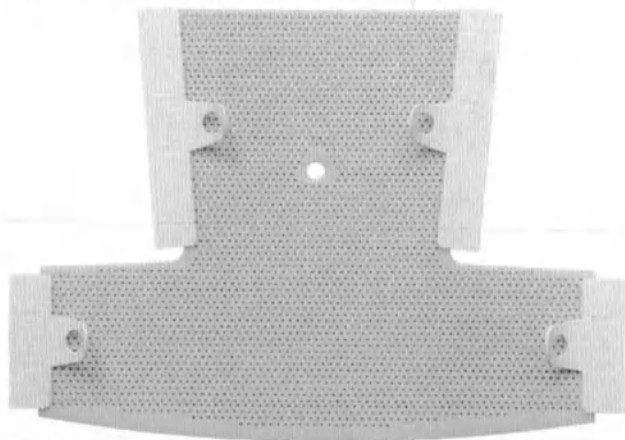


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RDLG202-2412C	2,4	365	10

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модель RDLG204-2412C

Внешний вид маски термопластической детской для головы, шеи и плеч с рамкой крепления типа O-Туре со вставкой с отверстием для носа, с 5-ти точечным креплением, выполненной из термопластика Klarity Lite Green, приведен на рисунке ниже.

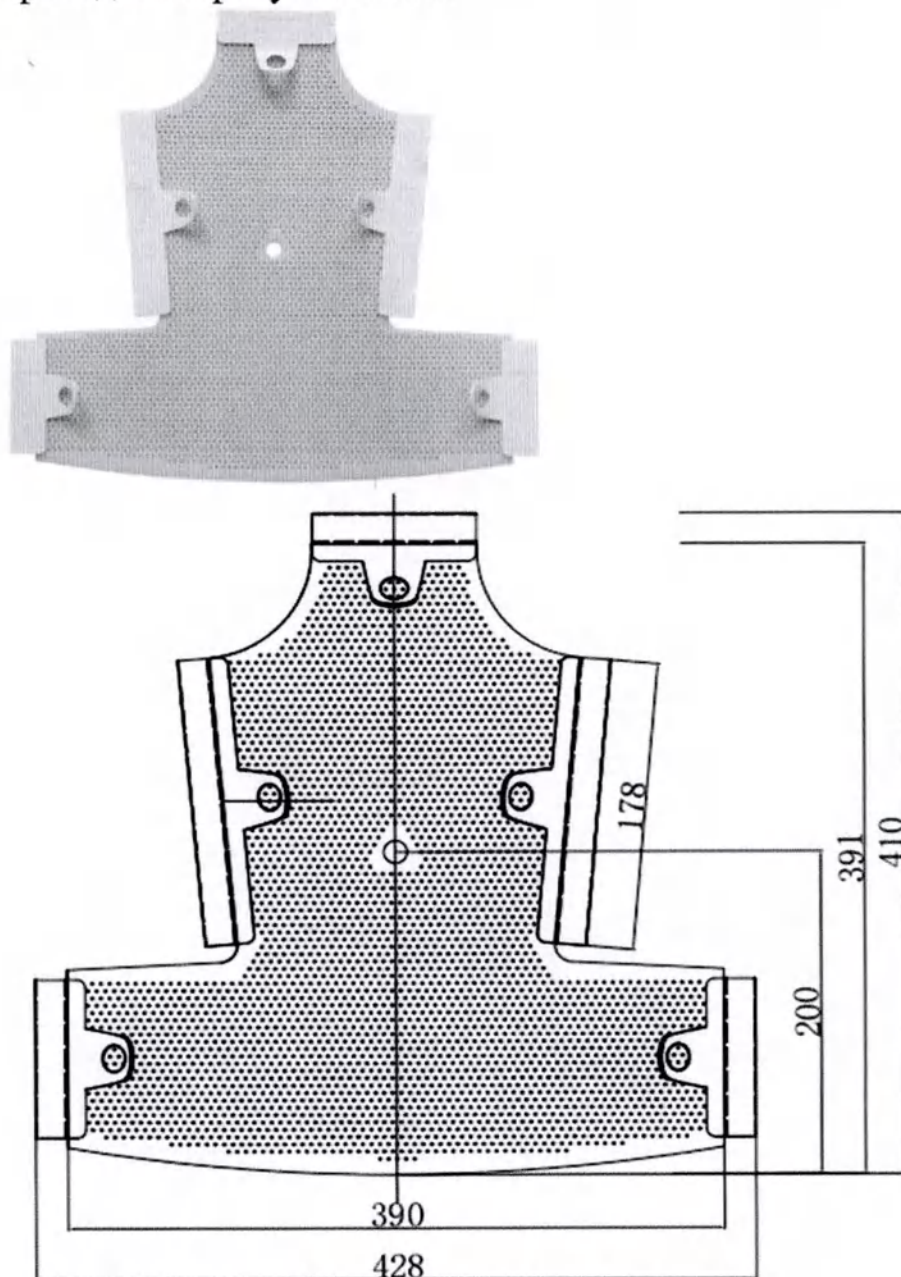


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RDLG204-2412C	2,4	338	10

Маска термопластическая Klarity, тип O-Туре, модели: RDLG260XL-20A, RDLG260XL-24A

Внешний вид маски термопластической для легких с рамкой крепления типа O-Туре со вставкой с закругленным краем и рисунком перфорации для IMRT, с 4-х точечным креплением, выполненной из термопластика Klarity Lite Green, приведен на рисунке ниже.


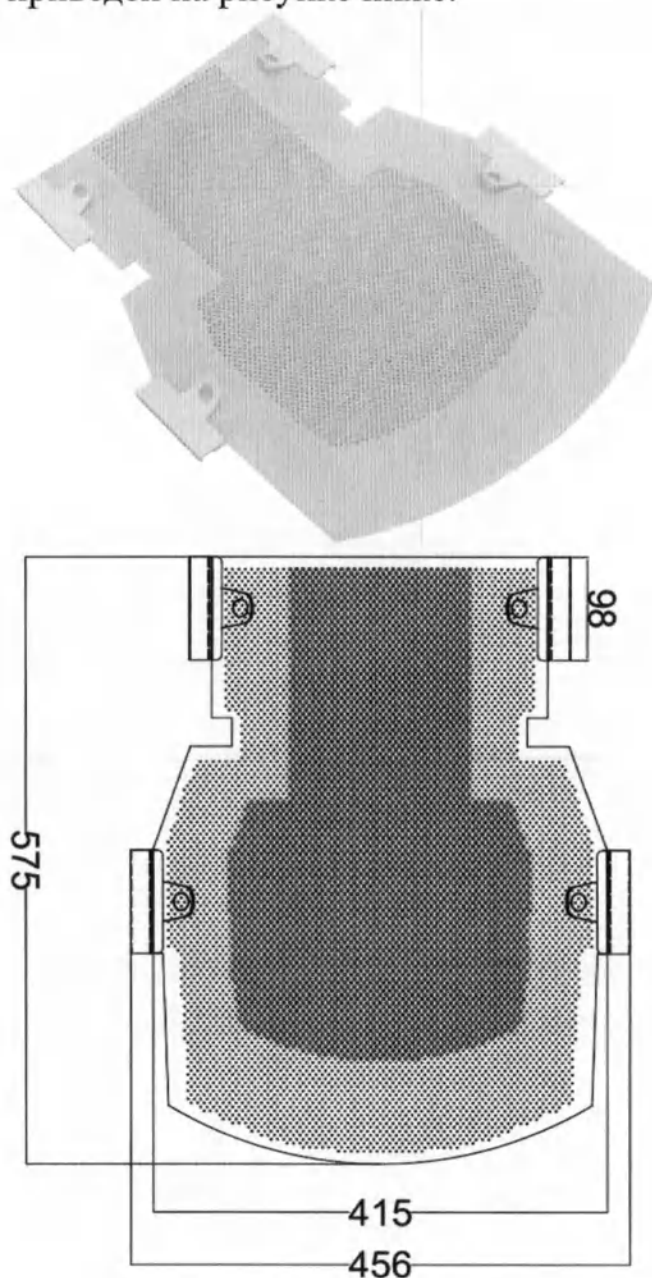


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RDLG260XL-20A	2,0	495	1
RDLG260XL-24A	2,4	501	1

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модель RDLG260L-2412C.

Внешний вид маски термопластической для грудной клетки с рамкой крепления типа O-Type, с 4-х точечным креплением, выполненной из термопластика Klarity Lite Green, приведен на рисунке ниже.

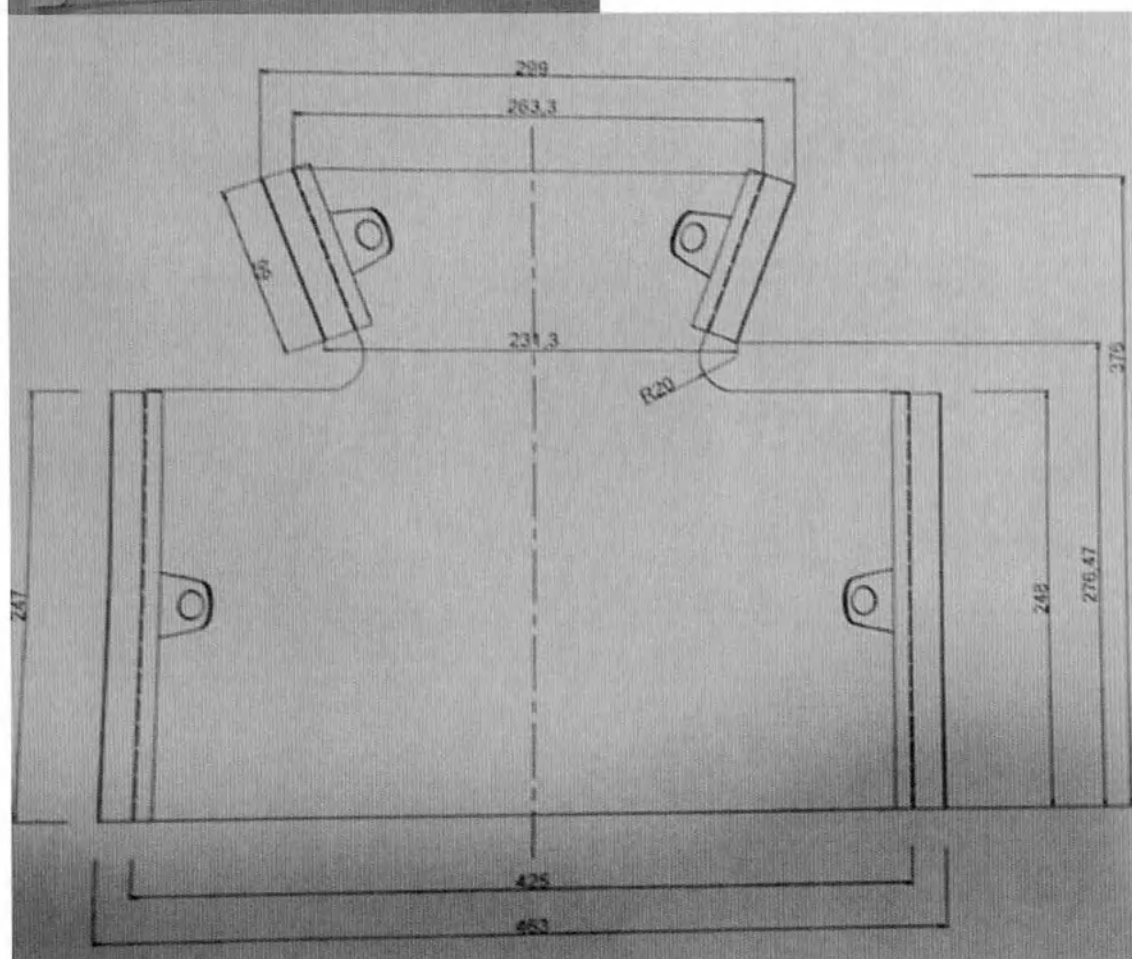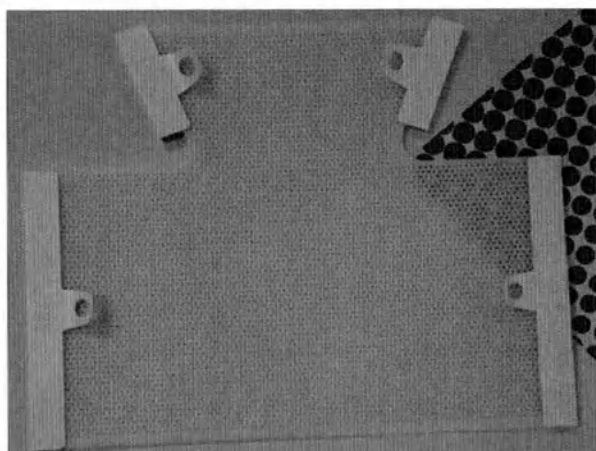


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RDLG260L-2412C	2,4	385	10

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модель RDLG260M-2412C

Внешний вид маски термопластической для грудной клетки с рамкой крепления типа O-Type, с 4-х точечным креплением, выполненной из термопластика Klarity Lite Green, приведен на рисунке ниже.

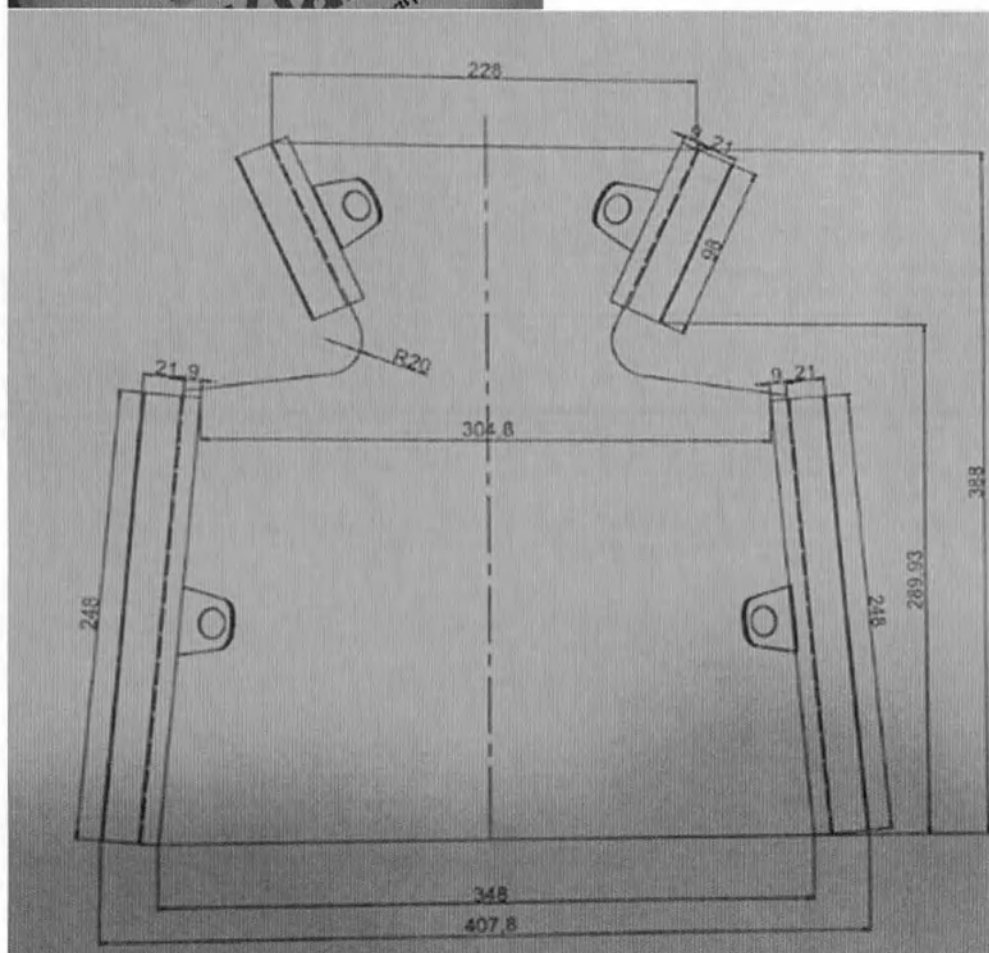


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RDLG260M-2412C	2,4	373	10

Маска термопластическая Klarity, тип O-Type, модель RDLG260S-2412C

Внешний вид маски термопластической для грудной клетки с рамкой крепления типа O-Type, с 4-х точечным креплением, выполненной из термопластика Klarity Lite Green, приведен на рисунке ниже.


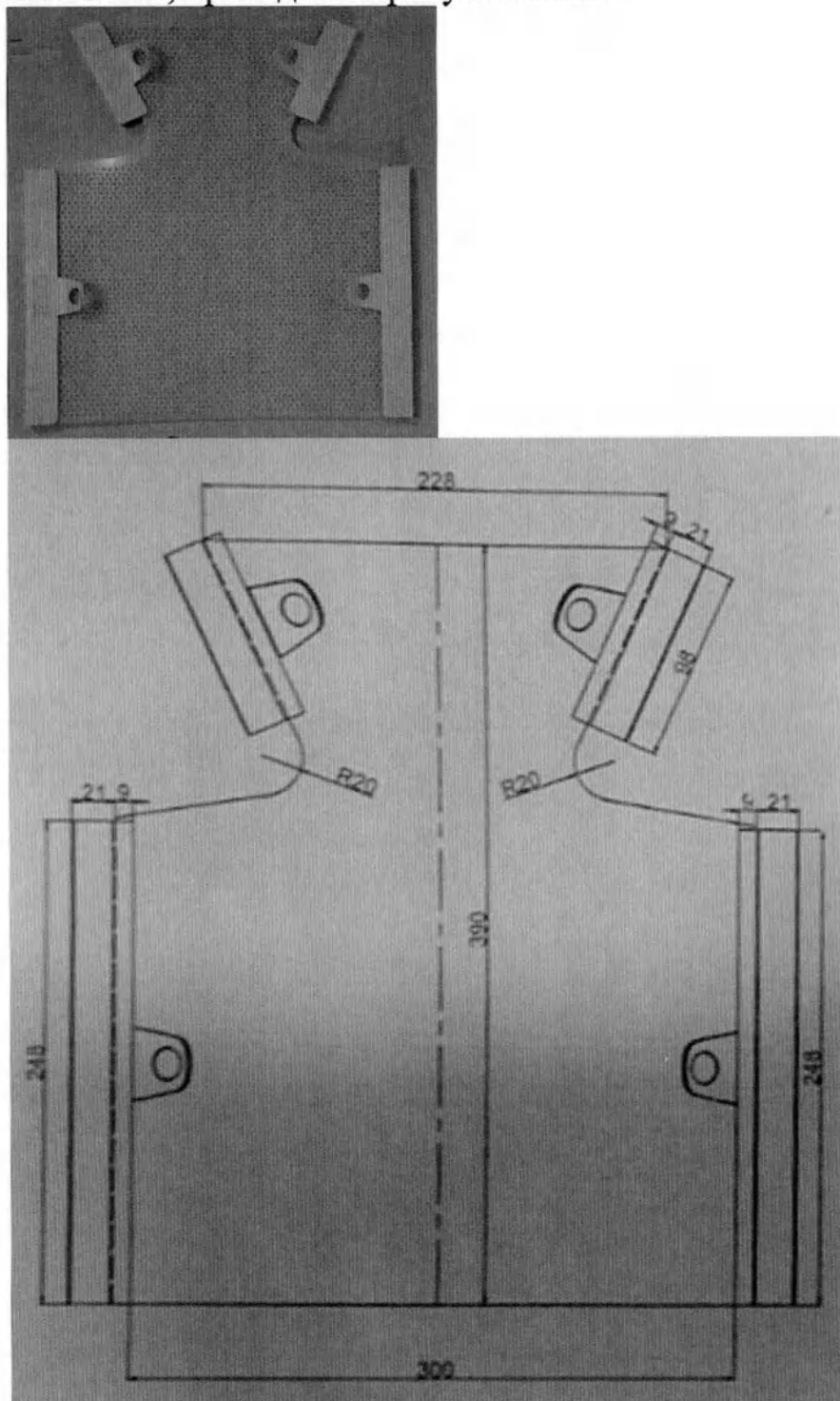


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт.
RDLG260S-2412C	2,4	358	10

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой PelvicFix
Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой PelvicFix,
модели R902-1, R902-3, R902-7.

Внешний вид маски термопластической для фиксации таза, с рамкой крепления типа О-Туре для многоразовой рамки, выполненной из термопластика Klarity White без перфорации, приведен на рисунке ниже.

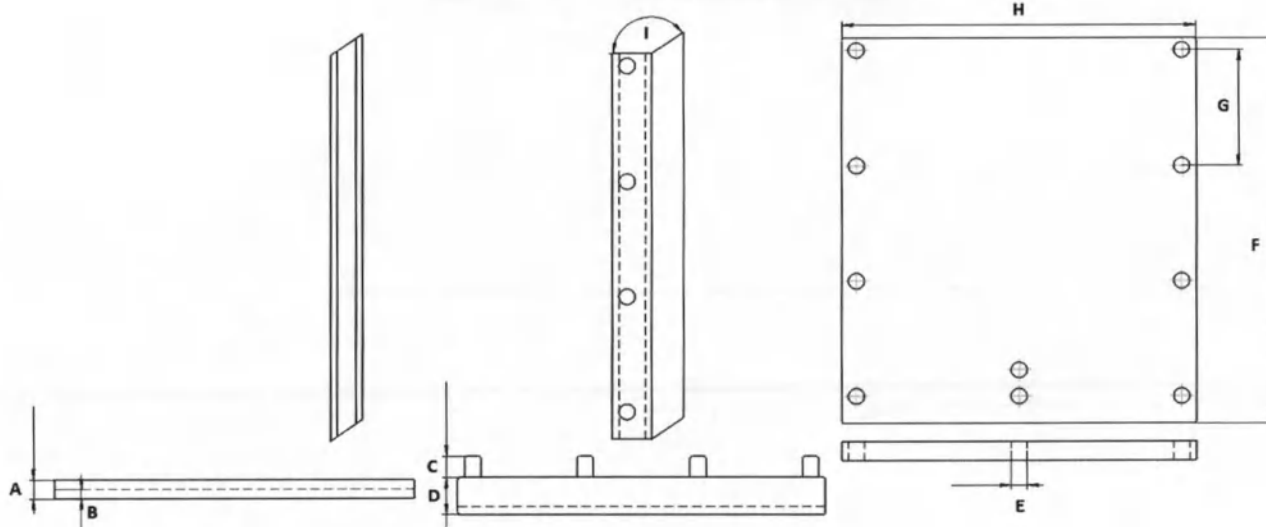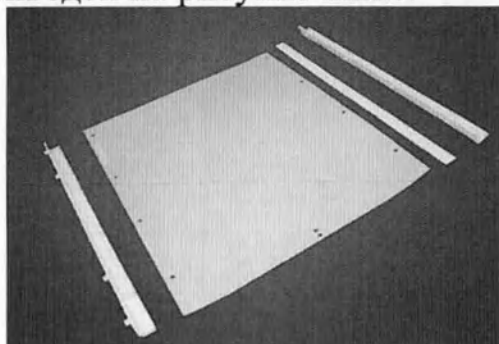

Основные технические характеристики:


Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R902-1	2,4	305	5
R902-3	3,2	586	5
R902-7	3,2	632	5

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2,4	2,3	1,5	3	1,4	560	140	406	90°

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой PelvicFix, модели R902-1A, R902-3A, R902-7A

Внешний вид маски термопластической для фиксации таза, с рамкой крепления типа O-Туре для одноразовой рамки, выполненной из термопластика Klarity White без перфорации, приведен на рисунке ниже.

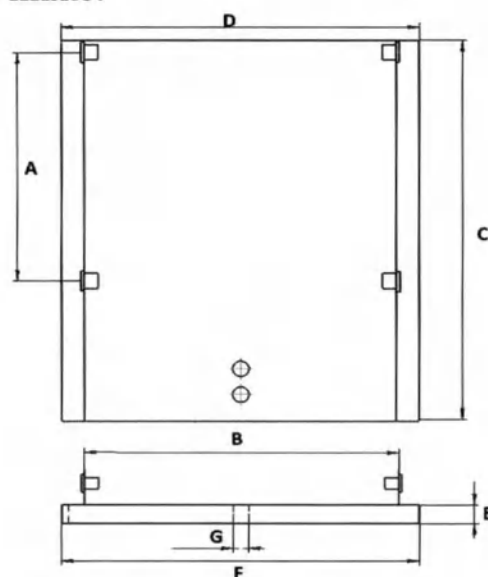

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R902-1A	2,4	608	6
R902-3A	3,2	556	6
R902-7A	3,2	590	6



Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G
370	410	560	460	2,4	460	3

Маска термопластическая Klarity, тип V-Type

Маска термопластическая Klarity, тип V-Type, модели RG460-4VT, RG461-4VT.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч с рамкой крепления типа V-Type с пинами, выполненной из термопластика Klarity Green, с рисунком перфорации для IMRT, приведен на рисунке ниже.

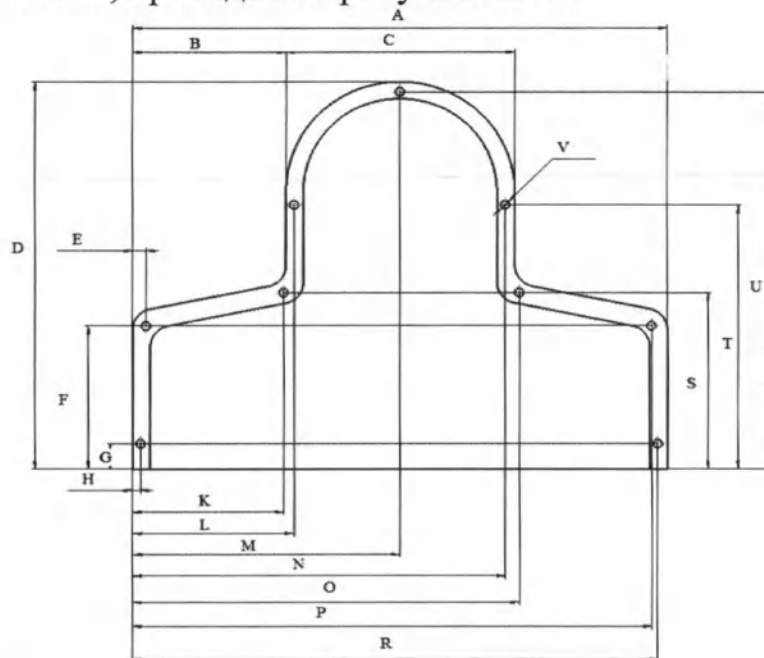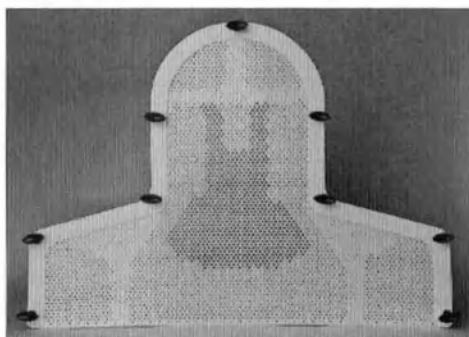

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG460-4VT*	2,4	582	6
RG461-4VT*	3,2	605	6

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	
610	176	253	460	14	134	22	10	185	195	

M	N	O	P	R	S	T	U	V
305	420	430	597	604	192	318	452	12,9

Маска термопластическая Klarity, тип V-Type, модели R460VT, R461VT, RG460VT, RG461VT.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч, с рамкой крепления типа V-Type с пинами, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

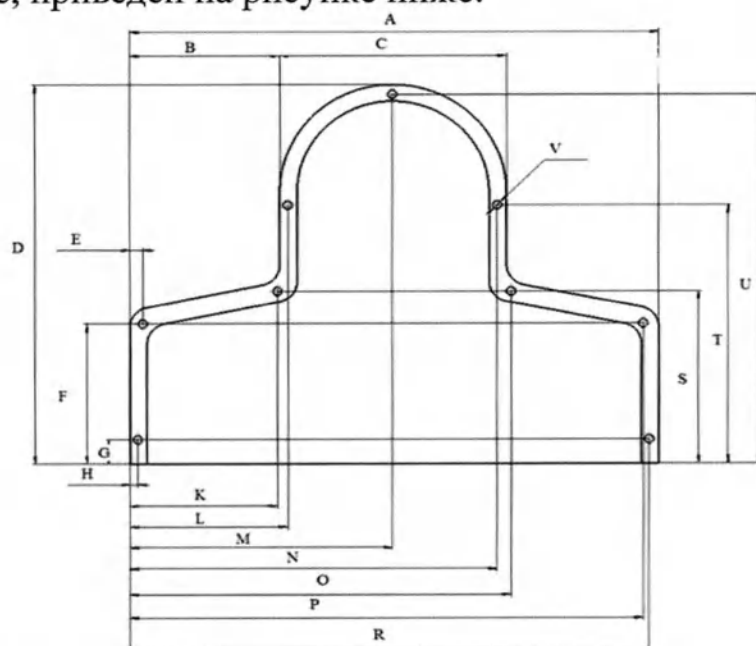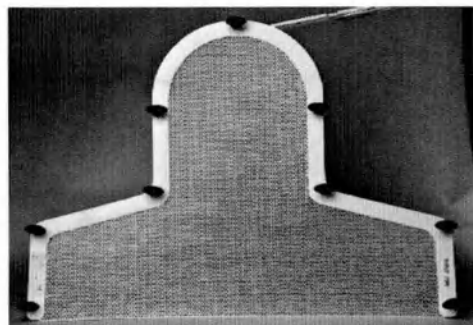

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R460VT	2,4	502	6
R461VT	3,2	510	6
RG460VT*	2,4	502	6
RG461VT*	3,2	510	6

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
610	176	253	460	14	134	22	10	185	195

M	N	O	P	R	S	T	U	V
305	420	430	597	604	192	318	452	12,9

Маска термопластическая Klarity, тип V-Type, модели RG460-4VHT, RG461-4VHT.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой крепления типа V-Type с пинами, выполненной из термопластика Klarity Green, с рисунком перфорации для IMRT, приведен на рисунке ниже.

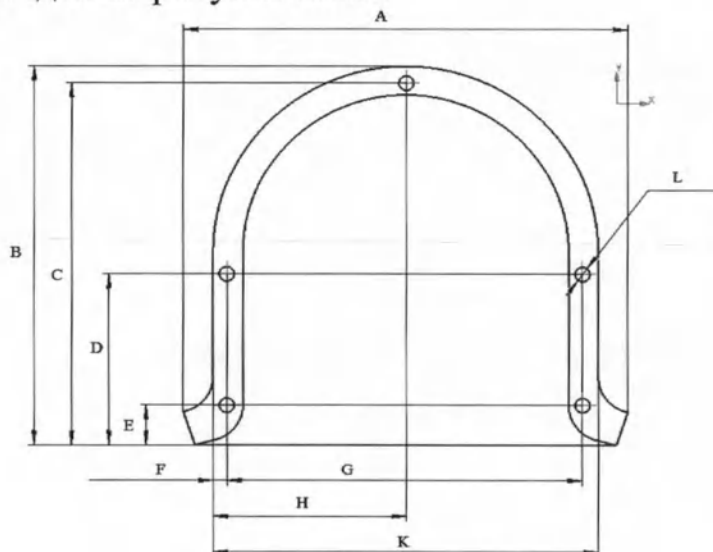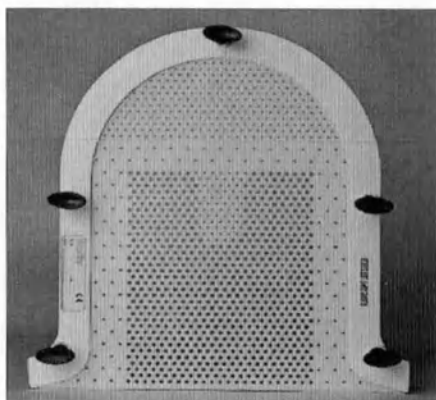

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG460-4VHT*	2,4	252	6
RG461-4VHT*	3,2	265	6



Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры:

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
300	297	287	153	30	9	250	125	253	12,9

Маска термопластическая Klarity, тип V-Type, модели R460VHT, R461VHT, RG460VHT, RG461VHT.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой крепления типа V-Type с пинами, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

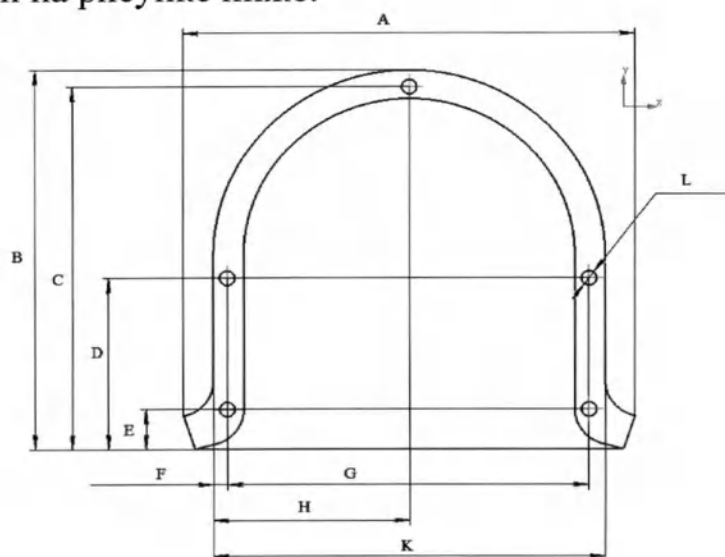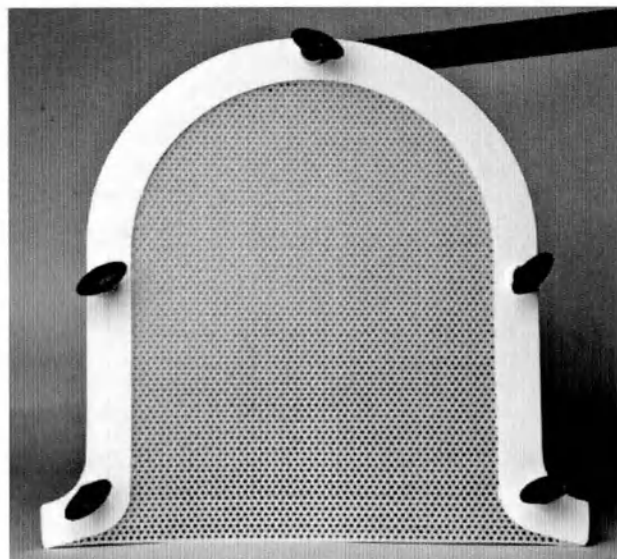

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R460VHT	2,4	250	6
R461VHT	3,2	262	6
RG460VHT*	2,4	250	6
RG461VHT*	3,2	262	6



Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
300	297	287	153	30	9	250	125	253	12,9

Маска термопластическая Klarity, тип V-Type, модели RG460-5VHT, RG461-5VHT.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой крепления типа V-Type, выполненной из термопластика Klarity Green, с удлиненной вставкой и рисунком перфорации для IMRT, приведен на рисунке ниже.

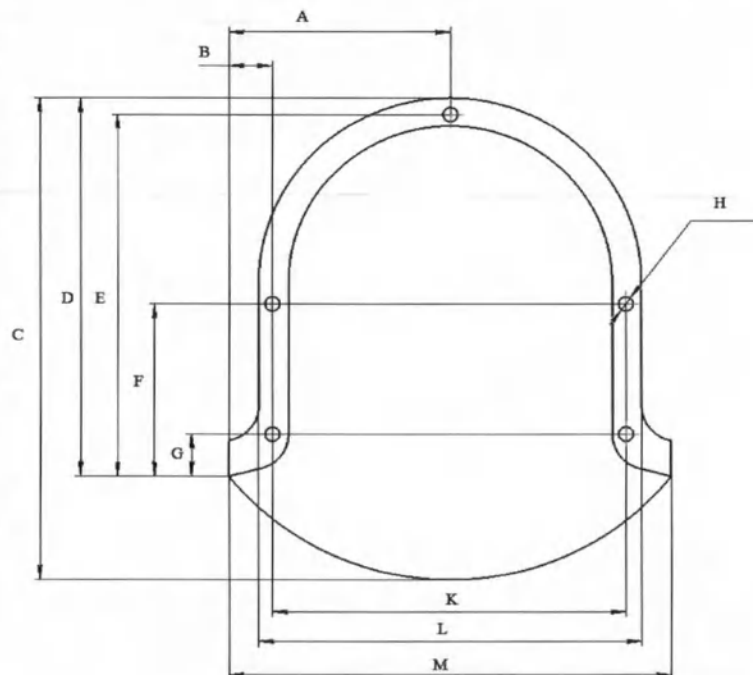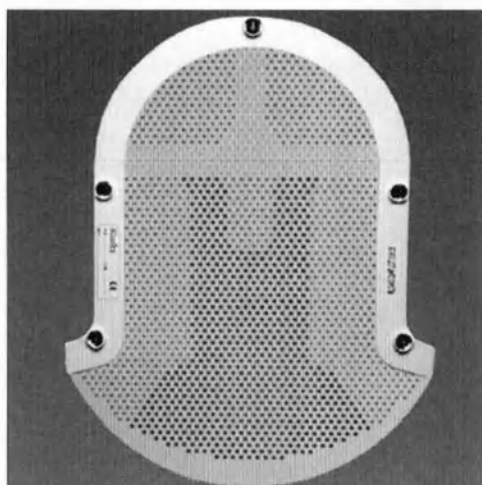

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG460-5VHT*	2,4	265	6
RG461-5VHT*	3,2	272	6



Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M
150	34	390	296	288	150	30	12,9	250	253	300

Маска термопластическая Klarity, тип V-Туре, модели RG460VC, RG461VC.

Внешний вид маски термопластической педиатрической для фиксации головы, шеи и плеч, с рамкой крепления типа V-Туре с пинами, выполненной из термопластика Klarity Green, приведен на рисунке ниже.

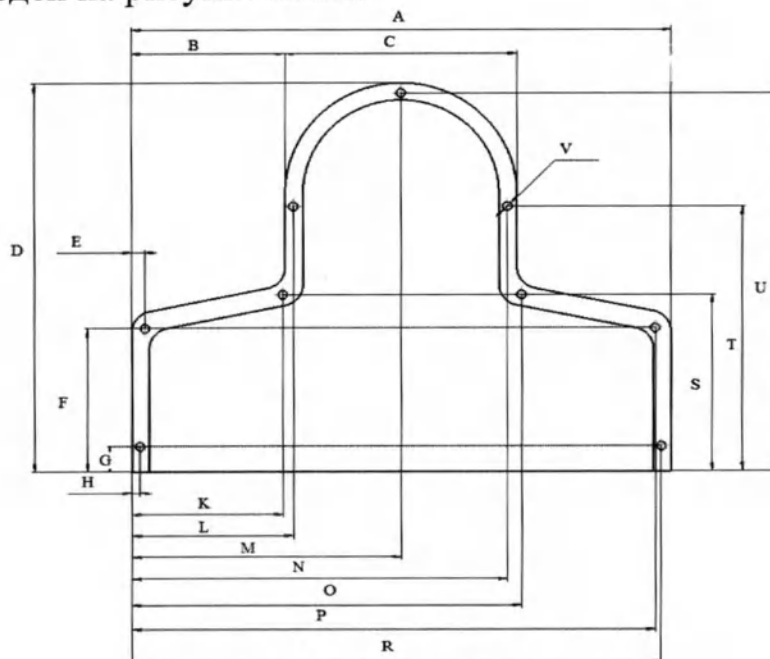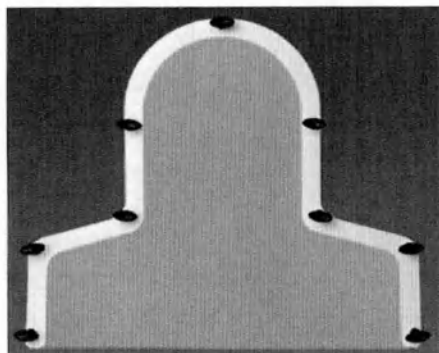

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG460VC *	2,4	420	6
RG461VC *	3,2	425	6

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
455	100	255	437	12,7	135	20	12,7	122	150

M	N	O	P	R	S	T	U	V
227,5	372	351	430	446,5	172	294	428	12,9

Маска термопластическая Klarity, тип V-Type, модель RB461-3210VHT

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с рамкой крепления типа V-Type, выполненной из термопластика Klarity Blue, приведен на рисунке ниже.

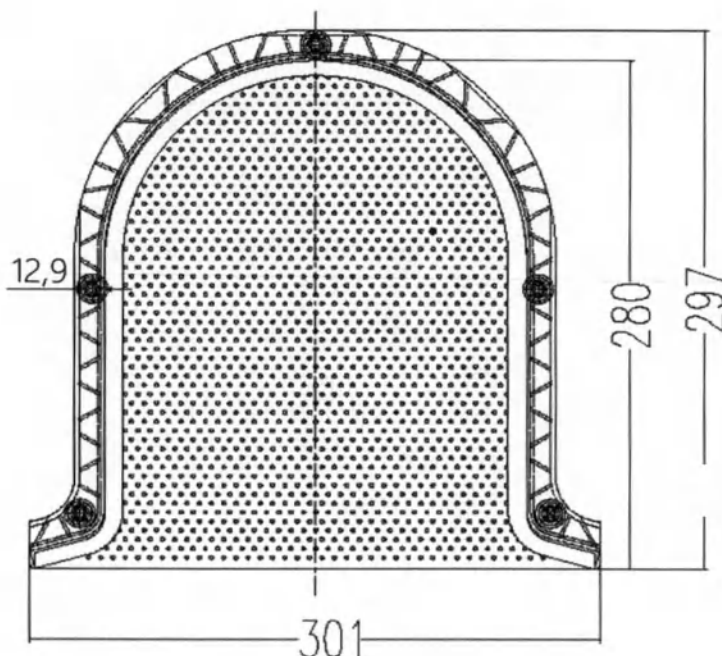
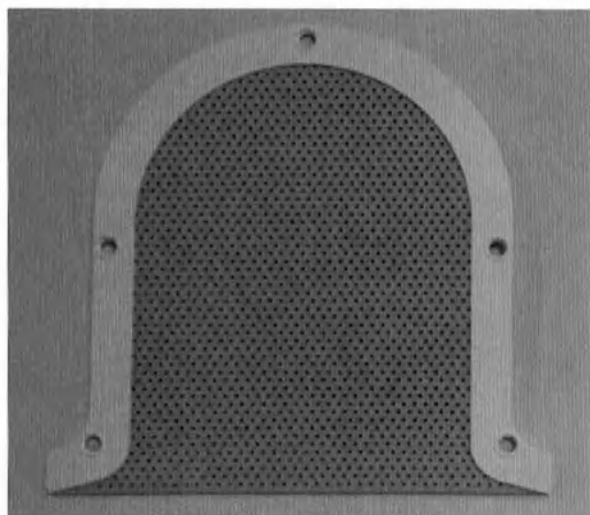


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB461-3210VHT	3,3	270	6

Маска термопластическая Klarity, тип V-Туре, модель RB461-6VHTF

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с рамкой крепления типа V-Туре и рисунком перфорации для IMRT Open Face (отверстие для лица), выполненной из термопластика Klarity Blue, приведен на рисунке ниже.

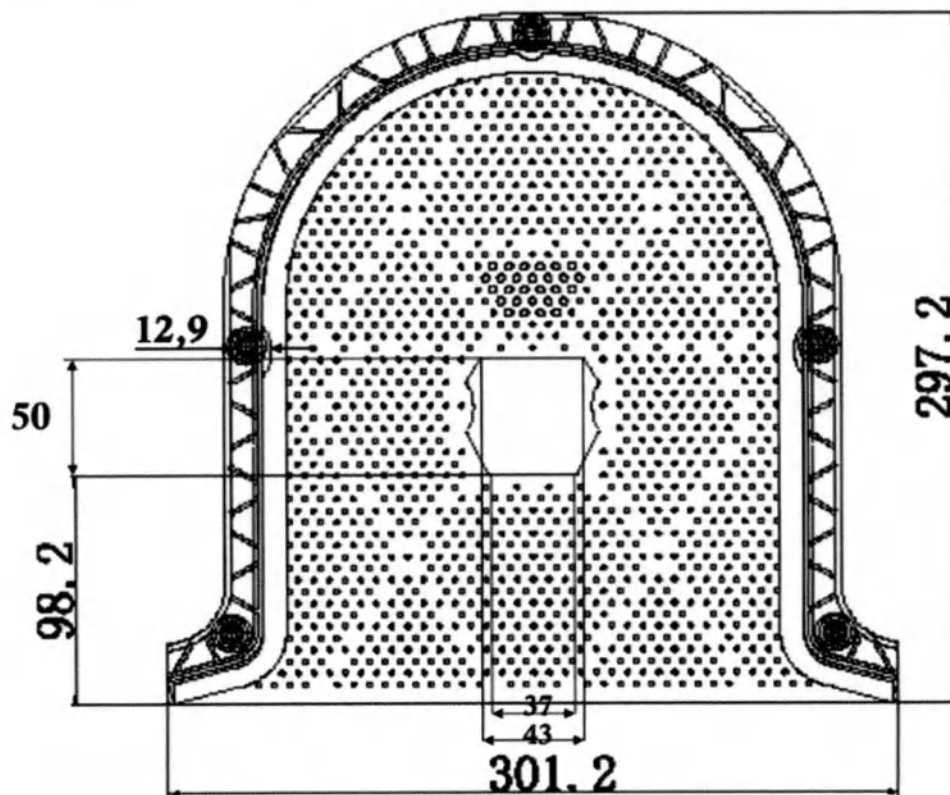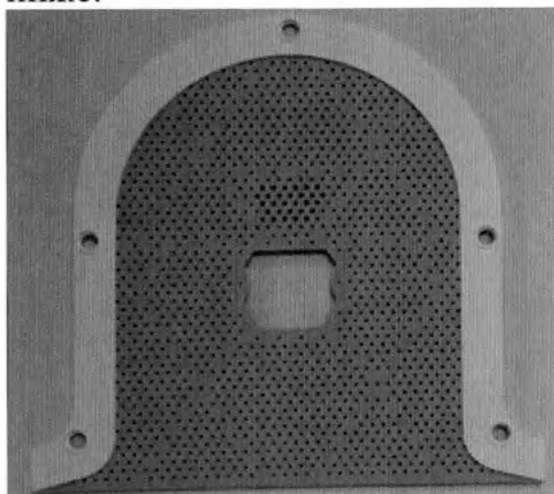


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB461-6VHTF	3,3	267	6

Маска термопластическая Klarity, тип V-Туре, модель RB461-6VHTEM

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с рамкой крепления типа V-Туре и рисунком перфорации для IMRT Open EM (отверстия для глаз и рта), выполненной из термопластика Klarity Blue, приведен на рисунке ниже.


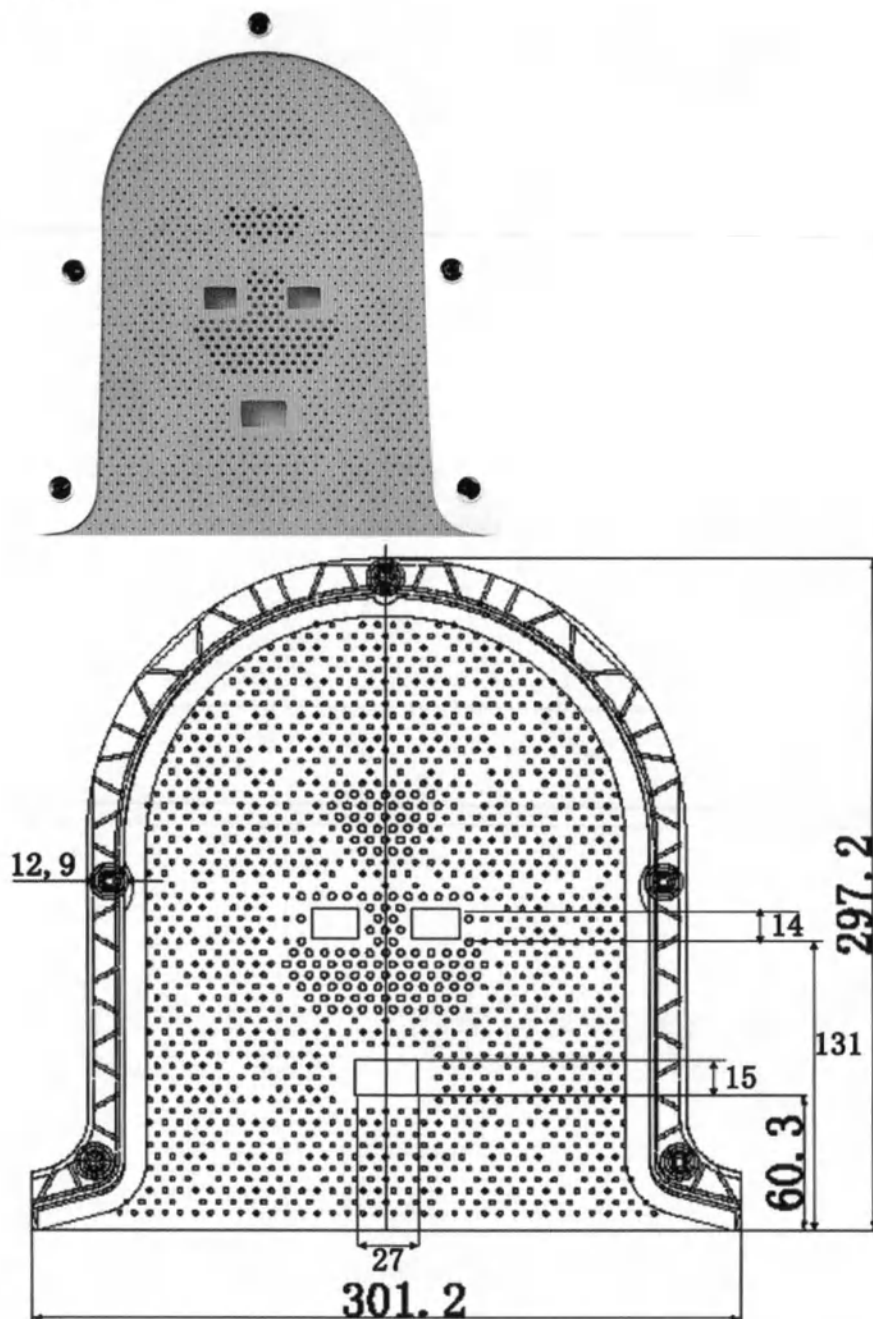


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB461-6VHTEM	3,3	268	6

Маска термопластическая Klarity, тип V-Туре, модель RB461-3210VT

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч с рамкой крепления типа V-Туре, выполненной из термопластика Klarity Blue, приведен на рисунке ниже.

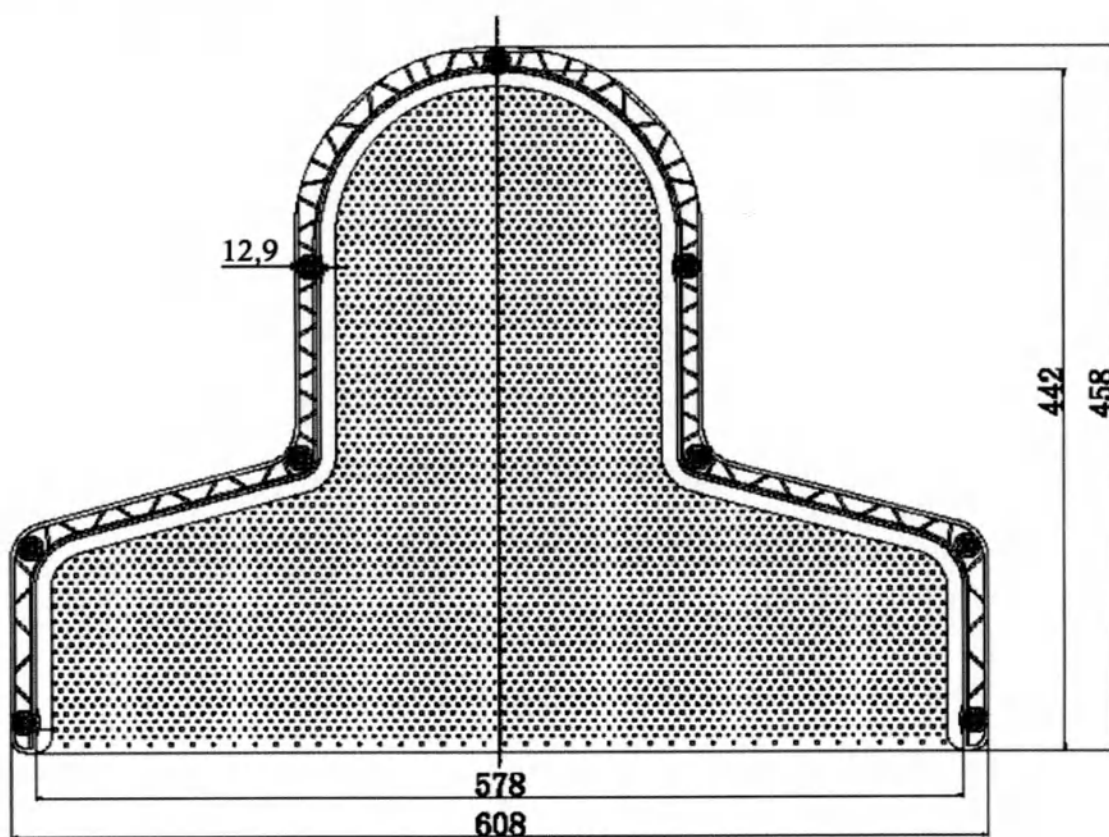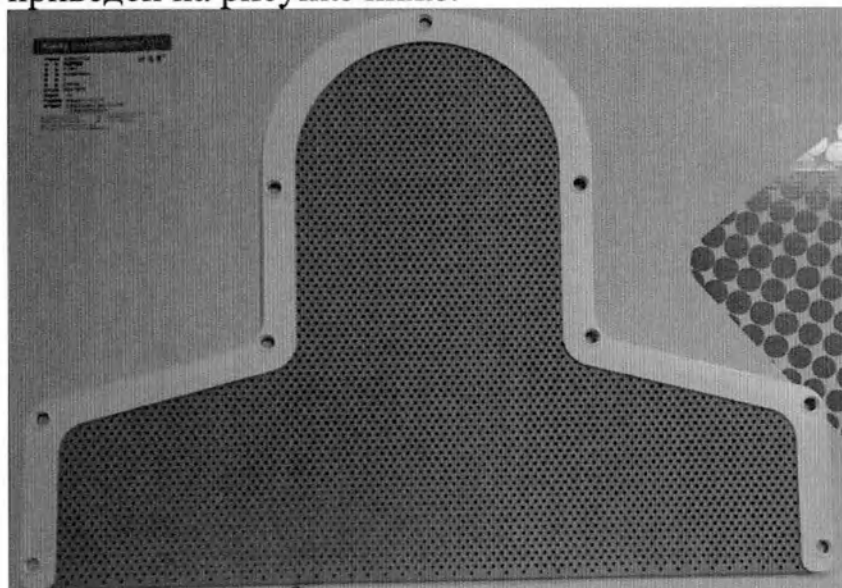


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB461-3210VT	3,3	515	6

Маска термопластическая Klarity, тип V-Type, модель RB461-6VTF

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч с рамкой крепления типа V-Type и рисунком перфорации для IMRT Open Face (отверстие для лица), выполненной из термопластика Klarity Blue, приведен на рисунке ниже.


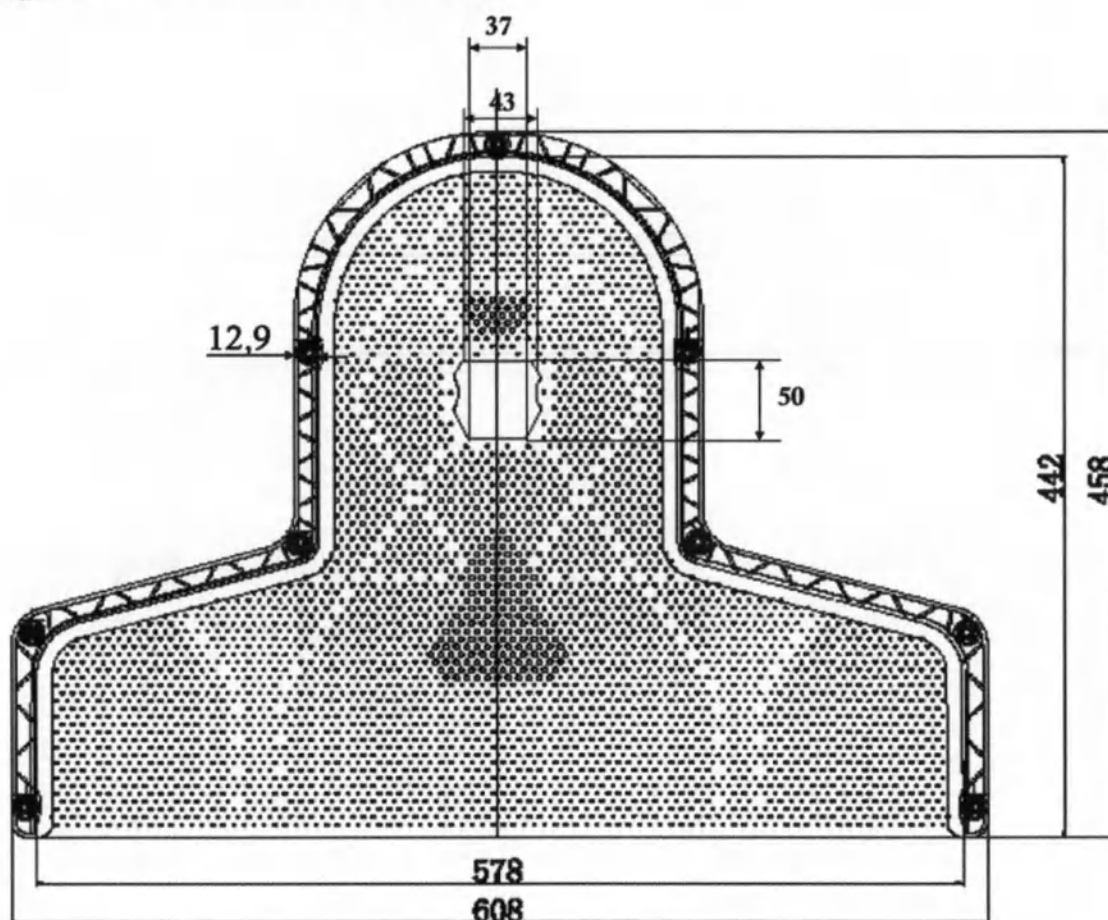


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB461-6VTF	3,3	509	6

Маска термопластическая Klarity, тип V-Type, модель RB461-6VTEM

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч с рамкой крепления типа V-Type и рисунком перфорации для IMRT Open EM (отверстия для глаз и рта), выполненной из термопластика Klarity Blue, приведен на рисунке ниже.

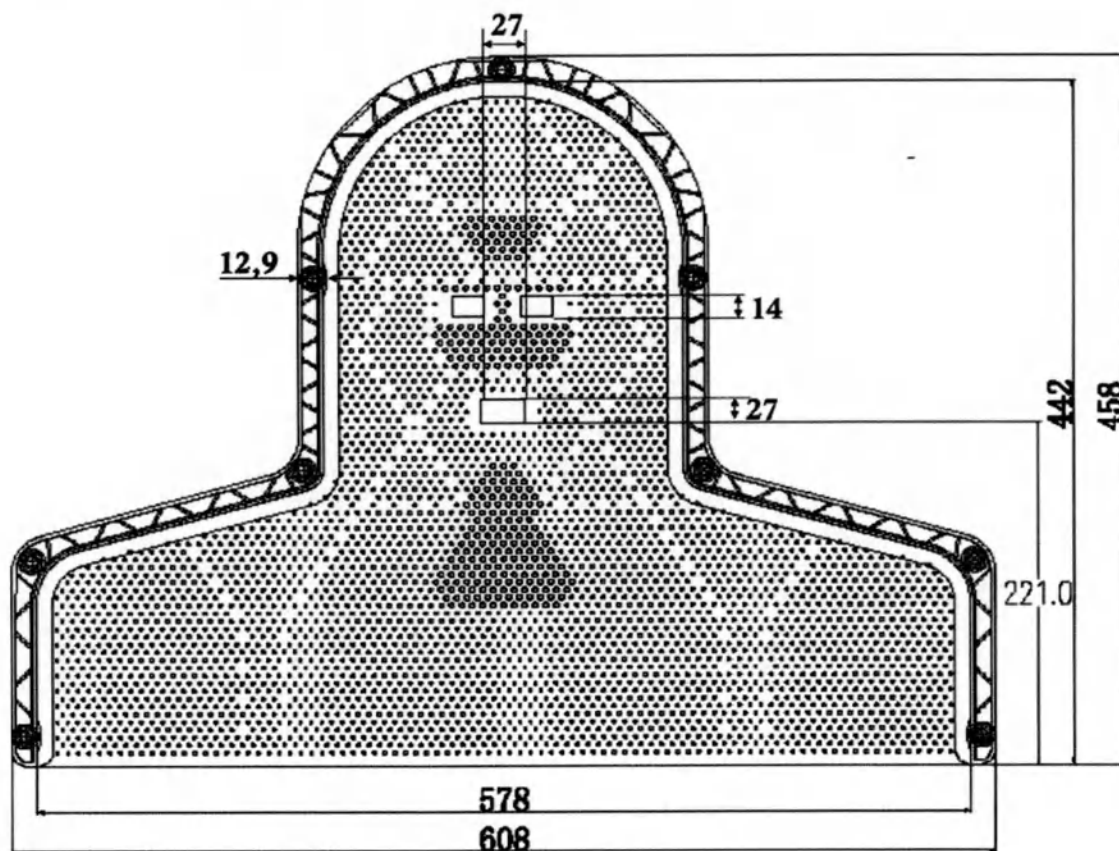
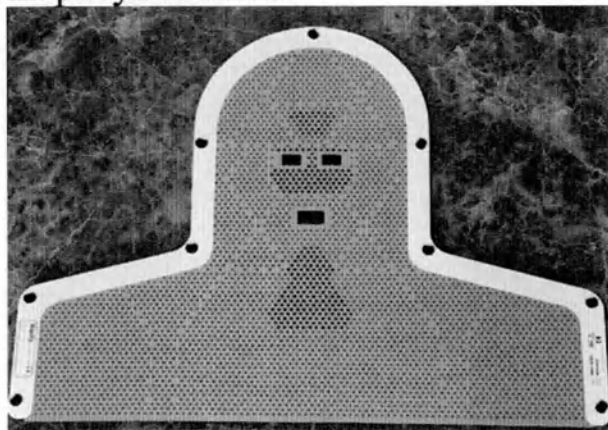


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB461-6VTEM	3,3	637	6

Маска термопластическая Klarity, тип V-Type, модель R461-6VTF

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч с рамкой крепления типа V-Type и рисунком перфорации для IMRT Open Face (отверстие для лица), выполненной из термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

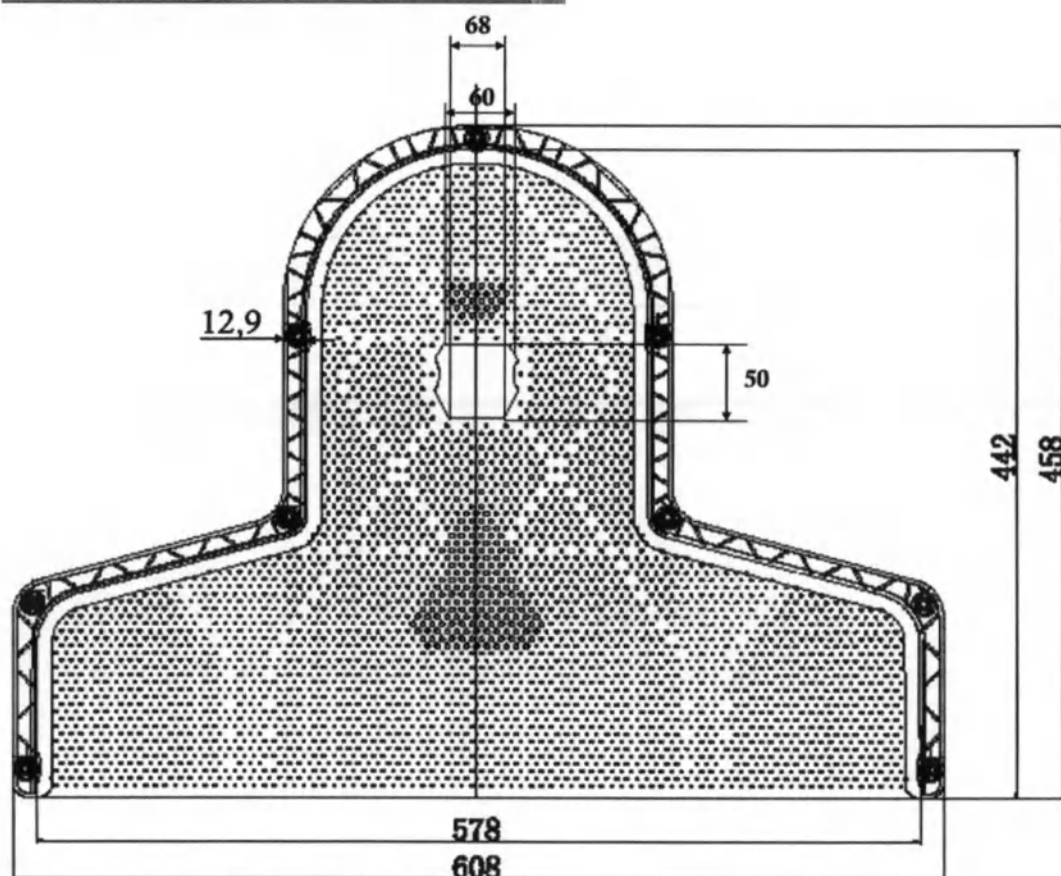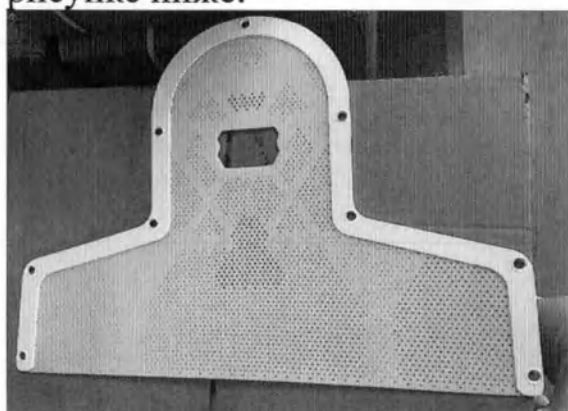


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R461-6VTF	3,2	502	6

Маска термопластическая Klarity, тип V-Type, модель R461-6VHTF

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с рамкой крепления типа V-Type и рисунком перфорации для IMRT Open Face (отверстие для лица), выполненной из термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

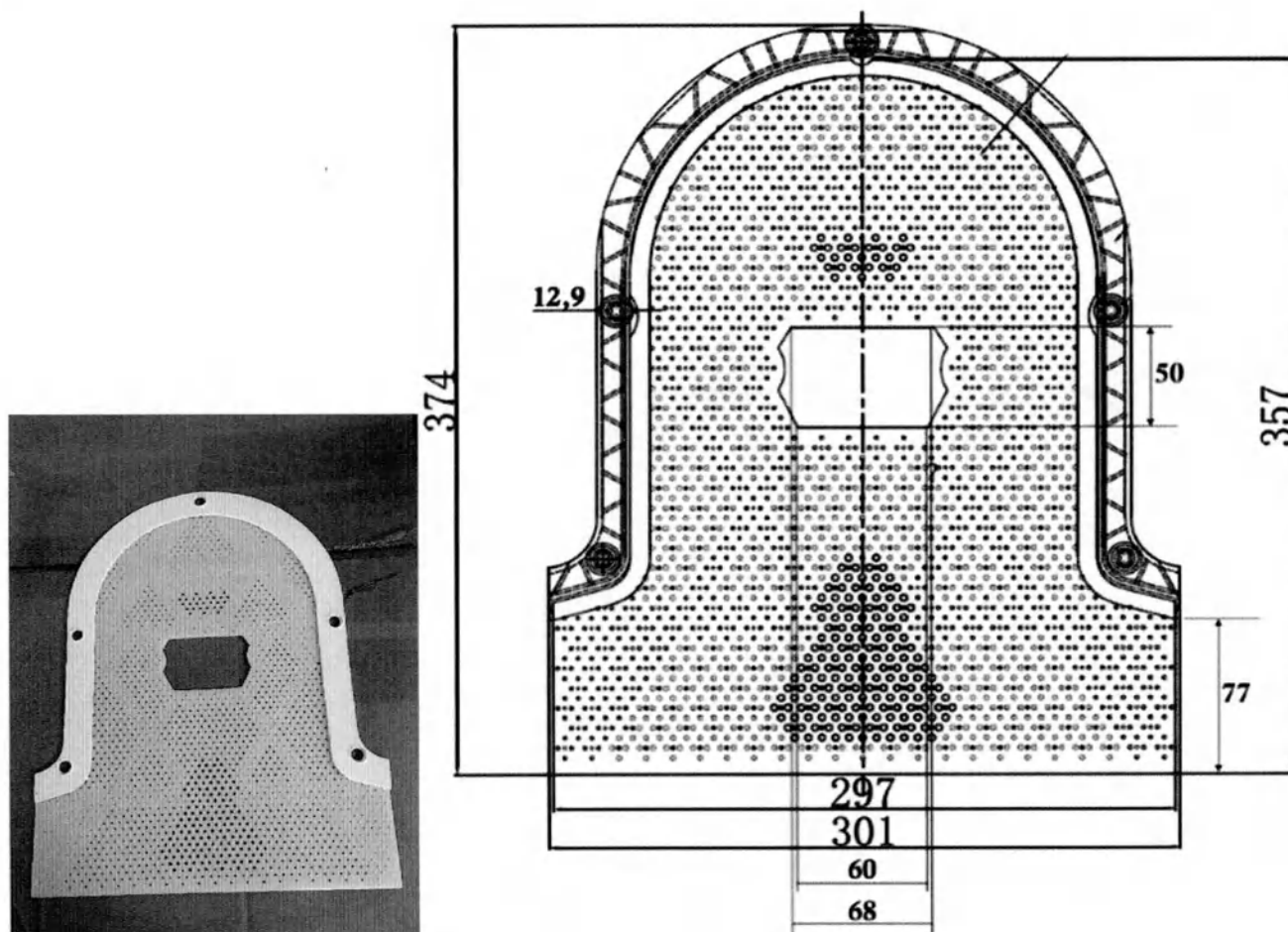


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R461-6VHTF	3,2	341	6

Маска термопластическая Klarity, тип P-Type

Маска термопластическая Klarity, тип P-Type, модели R-PRT2-2022, R-PRT2-2415, R-PRT2-2422, R-PRT2-2436, R-PRT2-3242, RG-PRT2-2015, RG-PRT2-2415.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой крепления типа P-Type с пинами, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

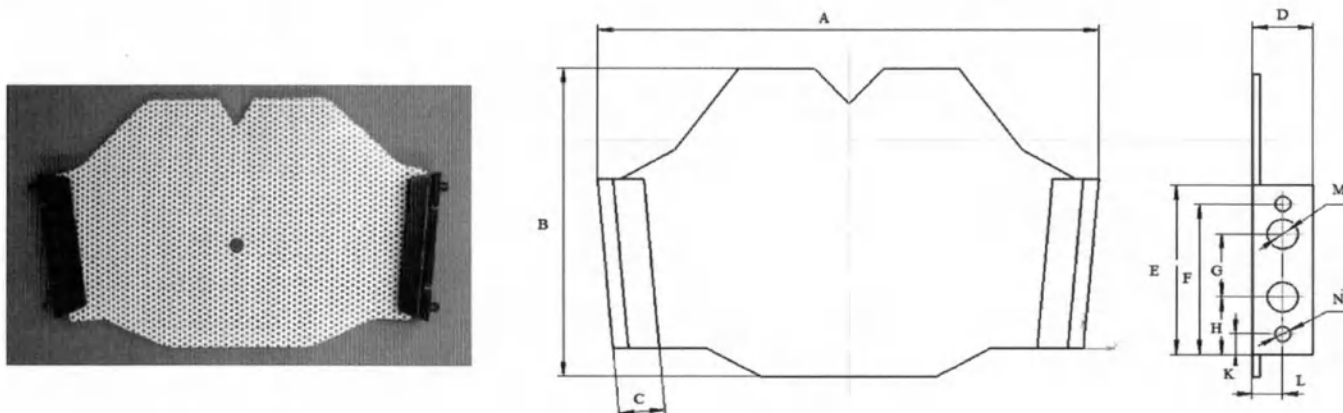

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R-PRT2-2022	2,0	172	10
R-PRT2-2415	2,4	185	10
R-PRT2-2422	2,4	182	10
R-PRT2-2436	2,4	180	10
R-PRT2-3242	3,2	178	10
RG-PRT2-2015*	2,0	170	10
RG-PRT2-2415*	2,4	176	10



Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N
405	235	26	27	140	108	76	33	13	18	10	8

Маска термопластическая Klarity, тип P-Туре, модели R-PRT3-2011, R-PRT3-2015, R-PRT3-2022, R-PRT3-2400, R-PRT3-2415, R-PRT3-2422, R-PRT3-2436, R-PRT3-3242, RG-PRT3-2015, RG-PRT3-2022, RG-PRT3-2400, RG-PRT3-2415, RG-PRT3-2422, RG-PRT3-2436.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой крепления типа Р-Туре с пинами, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

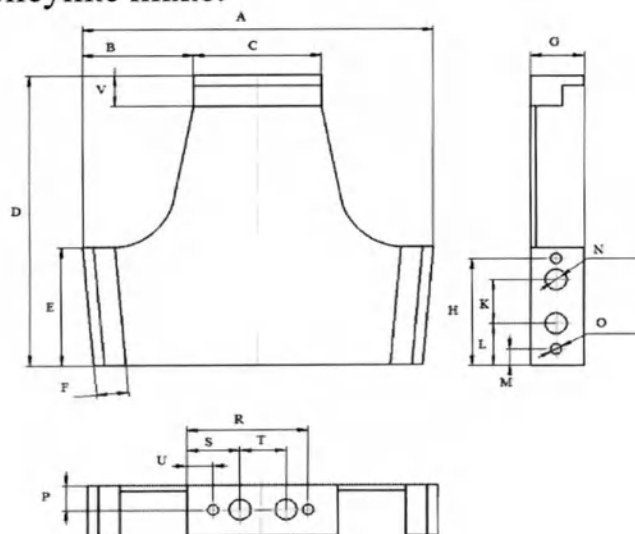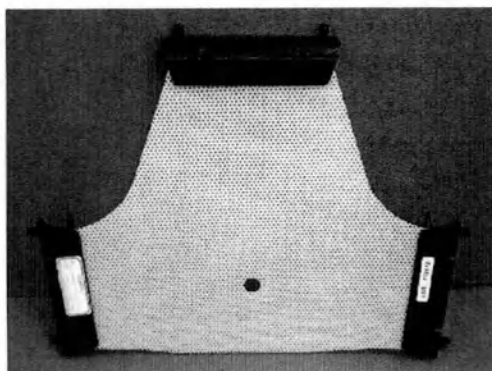

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R-PRT3-2011	2,0	222	10
R-PRT3-2015	2,0	218	10
R-PRT3-2022	2,0	216	10
R-PRT3-2400	2,4	240	10
R-PRT3-2415	2,4	236	10
R-PRT3-2422	2,4	232	10
R-PRT3-2436	2,4	235	10
R-PRT3-3242	3,2	230	10
RG-PRT3-2015*	2,0	206	10
RG-PRT3-2022*	2,0	202	10
RG-PRT3-2400*	2,4	248	10
RG-PRT3-2415*	2,4	238	10
RG-PRT3-2422*	2,4	236	10
RG-PRT3-2436*	2,4	230	10

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).


Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M
375	120	140	302	140	27	27	108	76	33	13

N	O	P	R	S	T	U	V
10	8	18	108	33	76	13	27

Маска термопластическая Klarity, тип P-Type, модели R-PRT44-2015, R-PRT44-2022, R-PRT44-2415, R-PRT44-2422, R-PRT44-2436, RG-PRT44-2015, RG-PRT44-2022, RG-PRT44-2415, RG-PRT44-2436.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы и шеи, с рамкой крепления типа P-Type с пинами, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

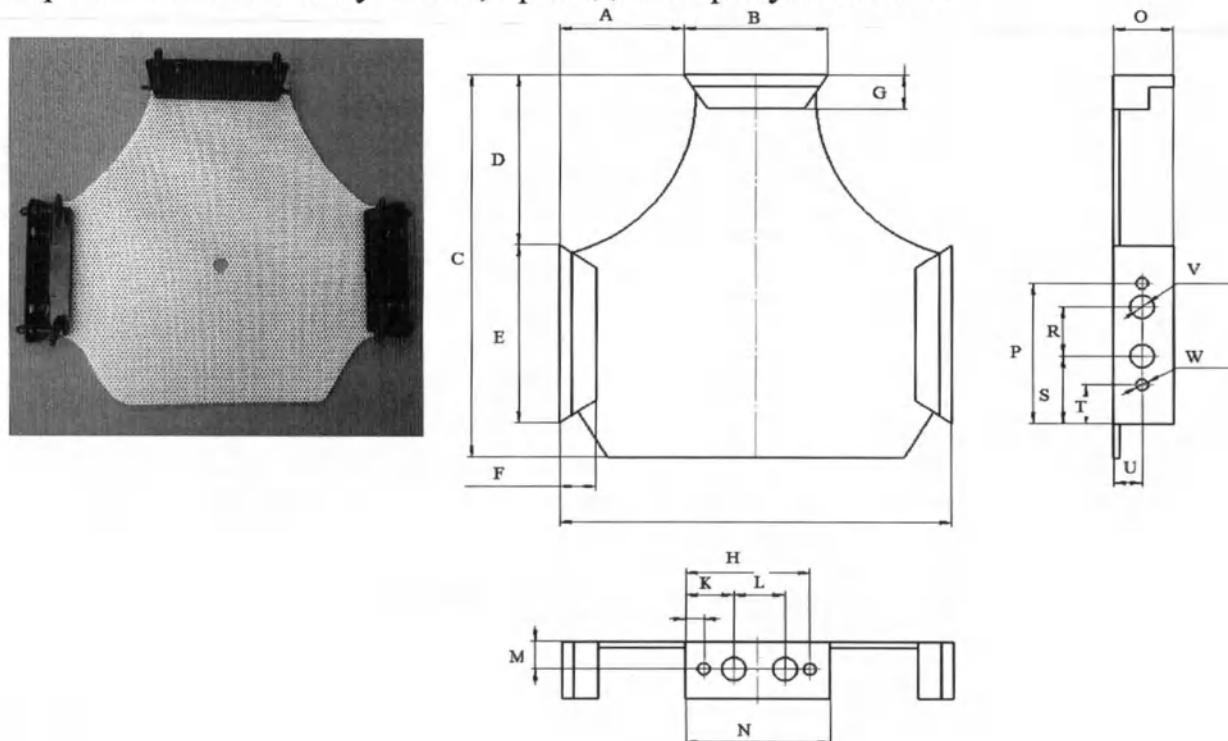

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R-PRT44-2015	2,0	218	10
R-PRT44-2022	2,0	215	10
R-PRT44-2415	2,4	252	10
R-PRT44-2422	2,4	249	10
R-PRT44-2436	2,4	245	10
RG-PRT44-2015*	2,0	218	10
RG-PRT44-2022*	2,0	215	10
RG-PRT44-2415*	2,4	252	10
RG-PRT44-2436*	2,4	260	10

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M
120	140	340	162	140	27	27	108	33	76	18

N	O	P	R	S	T	U	V	W
140	27	108	76	33	13	18	10	8

Маска термопластическая Klarity, тип P-Туре, модель RG-PRT3-24A.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, с рамкой крепления типа Р-Туре, с рисунком перфорации для IMRT, выполненной из термопластика Klarity Green, приведен на рисунке ниже.

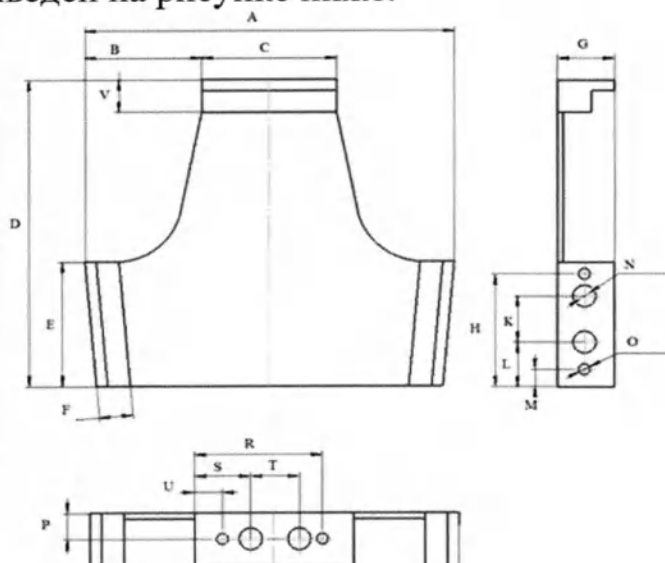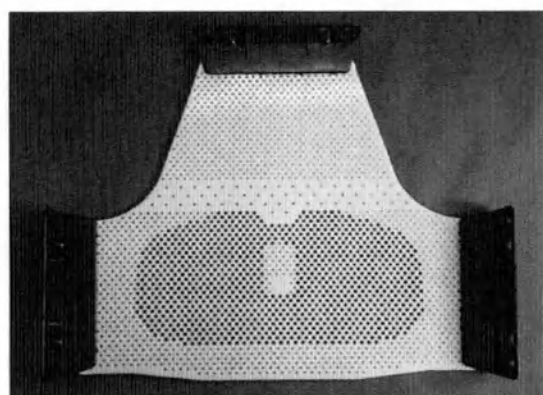

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG-PRT3-24A*	2,4	250	10

Примечание – Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M
375	120	140	302	140	27	27	108	76	33	13

N	O	P	R	S	T	U	V
10	8	18	108	33	76	13	27

Маска термопластическая Klarity, тип P-Type, модели R-PRT31-2022, R-PRT31-2415, R-PRT31-2436, R-PRT31-3242, RG-PRT31-2015, RG-PRT31-2022, RG-PRT31-2436, RG-PRT31-3242.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы и шеи, с рамкой крепления типа P-Type, с удлиненной вставкой, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

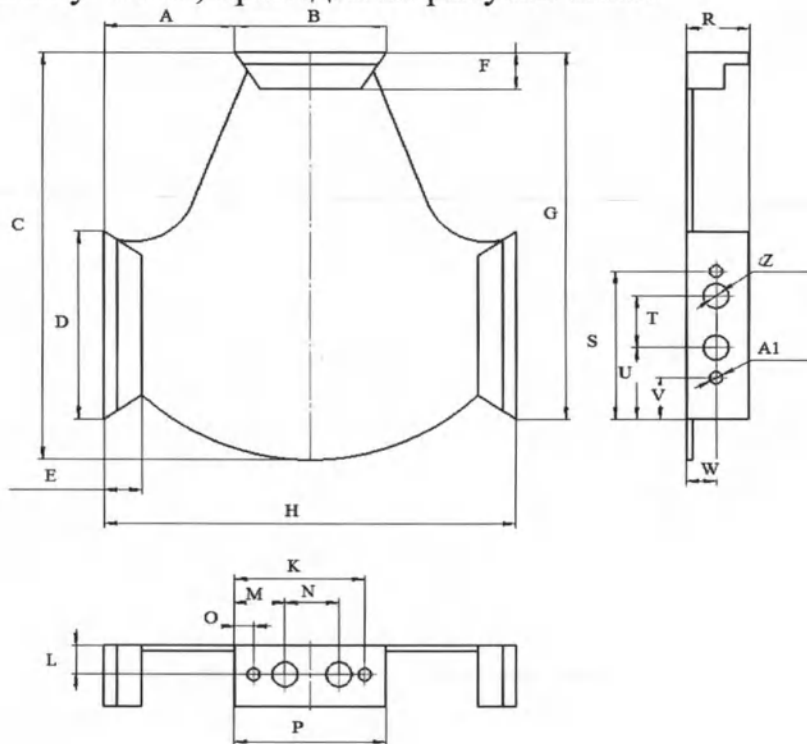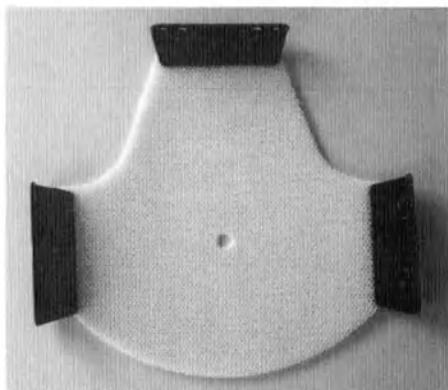

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R-PRT31-2022	2,0	214	10
R-PRT31-2415	2,4	210	10
R-PRT31-2436	2,4	242	10
R-PRT31-3242	3,2	262	10
RG-PRT31-2015*	2,0	212	10
RG-PRT31-2022*	2,0	208	10
RG-PRT31-2436*	2,4	246	10
RG-PRT31-3242*	3,2	256	10

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).


Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N
120	140	340	140	27	27	302	375	108	18	33	76

O	P	R	S	T	U	V	W	A1
13	140	27	108	76	33	13	27	8

Маска термопластическая Klarity, тип P-Туре, модели R-PRTL-2400, R-PRTL-2415, R-PRTL-2436, R-PRTL-3242, RG-PRTL-2015, RG-PRTL-2400, RG-PRTL-2436, RG-PRTL-3242.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч с рамкой крепления типа Р-Туре с пинами, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

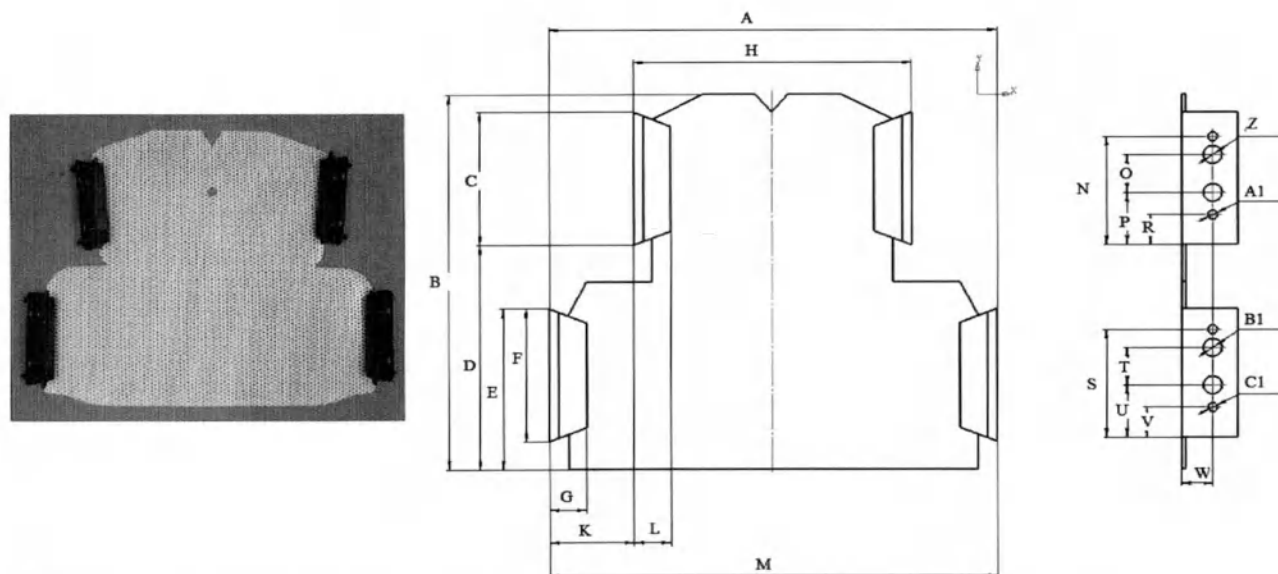

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R-PRTL-2400	2,4	362	10
R-PRTL-2415	2,4	358	10
R-PRTL-2436	2,4	355	10
R-PRTL-3242	3,2	350	10
RG-PRTL-2015*	2,0	350	10
RG-PRTL-2400*	2,4	366	10
RG-PRTL-2436*	2,4	352	10
RG-PRTL-3242*	3,2	348	10

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
490	390	140	220	180	140	27	354	68	27

M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	A1	B1	C1
490	108	76	33	13	108	76	33	13	18	8	10	8

Маска термопластическая Klarity, тип P-Type, модели R-PRT5-2415, R-PRT5-2422, R-PRT5-2436, R-PRT5-3242, RG-PRT5-2015, RG-PRT5-2022, RG-PRT5-2415, RG-PRT5-2422, RG-PRT5-2436, RG-PRT5-3242.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч с рамкой крепления типа P-Type с пинами, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, приведен на рисунке ниже.

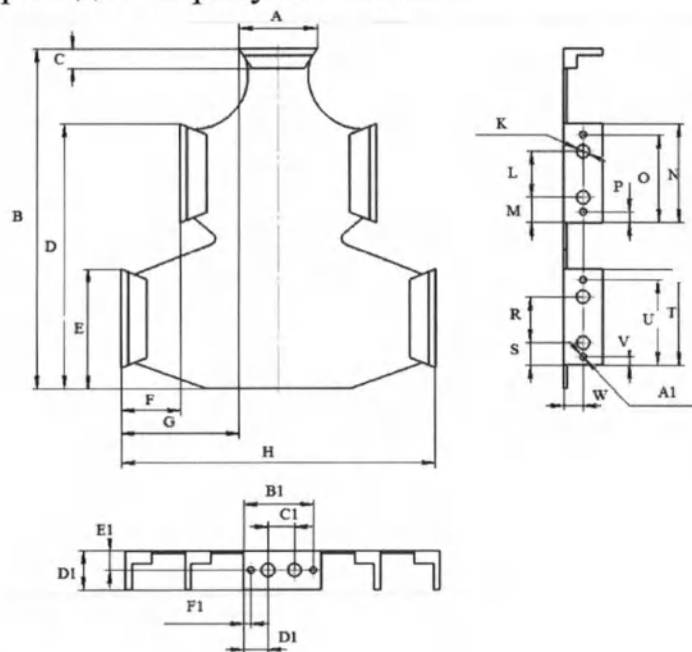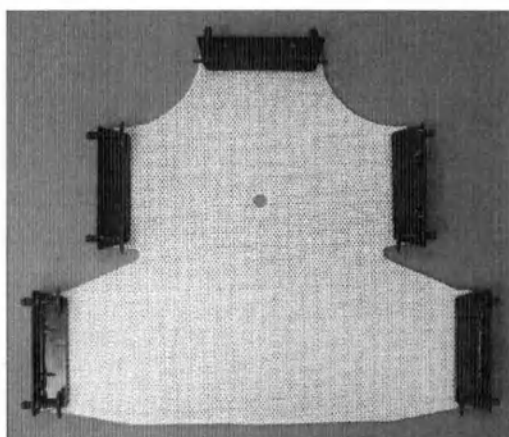

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R-PRT5-2415	2,4	522	10
R-PRT5-2422	2,4	520	10
R-PRT5-2436	2,4	512	10
R-PRT5-3242	3,2	508	10
RG-PRT5-2015*	2,0	515	10
RG-PRT5-2022*	2,0	510	10
RG-PRT5-2415*	2,4	518	10
RG-PRT5-2422*	2,4	526	10
RG-PRT5-2436*	2,4	532	10
RG-PRT5-3242*	3,2	528	10

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	R
140	435	25	365	178	68	180	490	10	75	32	140	128	13	75

S	T	U	V	W	A1	B1	C1	D1	E1	F1
8	140	128	13	16	8	128	75	32	27	13

Маска термопластическая Klarity, тип P-Type, модели RG-PRT5-24A, RG-PRT5-32A.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы и плеч, с рамкой крепления типа P-Type, с рисунком перфорации для IMRT, выполненной из термопластика Klarity Green, приведен на рисунке ниже.

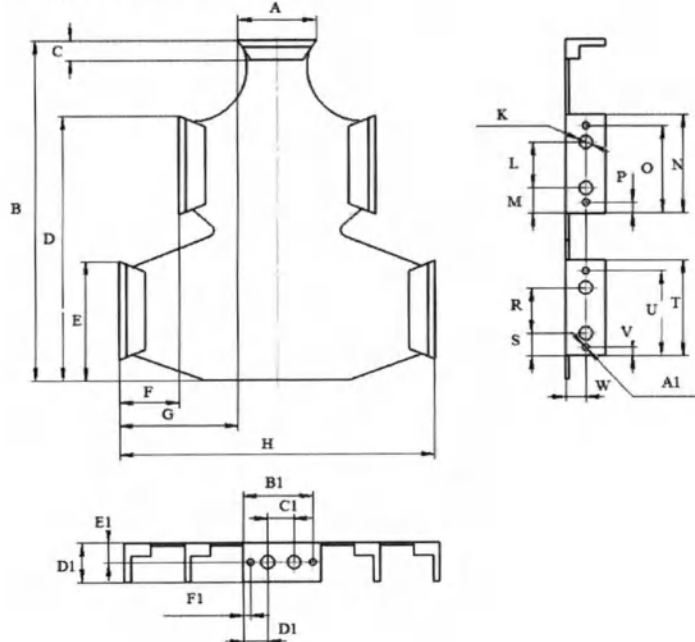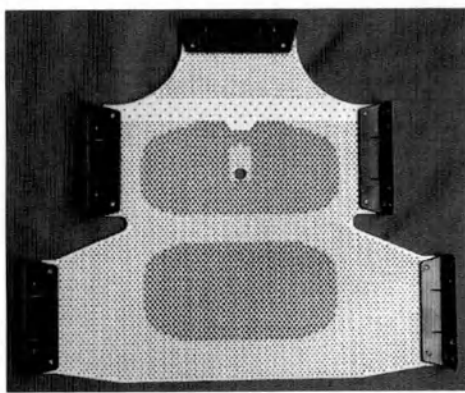

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG-PRT5-24A*	2,4	520	10
RG-PRT5-32A*	3,2	542	10

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).



Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	R
140	435	25	365	178	68	180	490	10	75	32	140	128	13	75

S	T	U	V	W	A1	B1	C1	D1	E1	F1
8	140	128	13	16	8	128	75	32	27	13

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R
Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R,
модели R91-2400M, R91-2436M, R91-3242M

Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity – R для фиксации таза, выполненной из термопластика Klarity White, представлен на рисунке ниже.

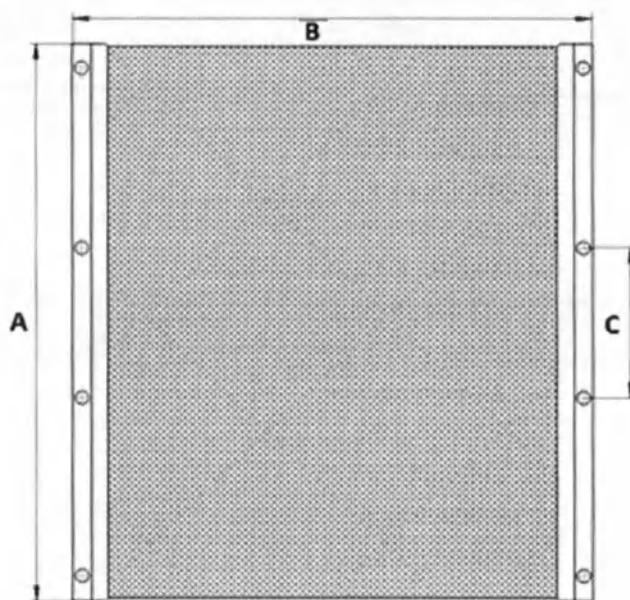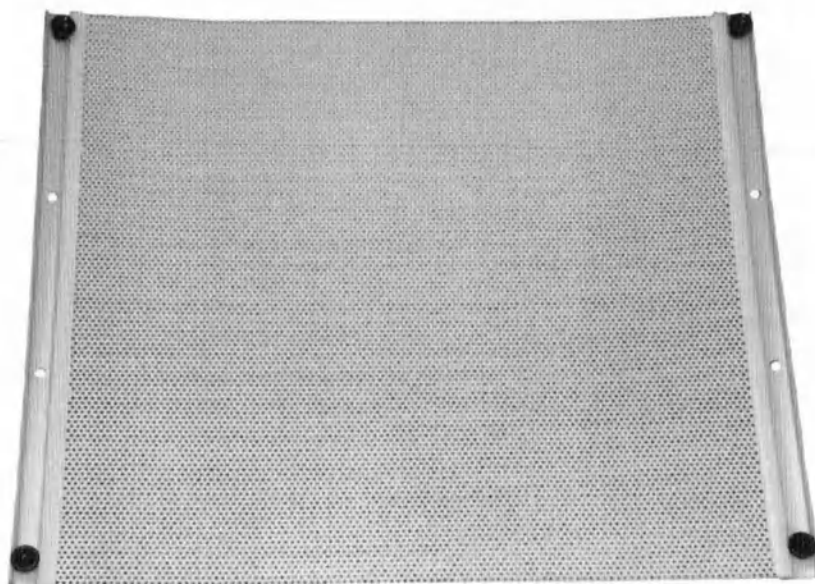

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R91-2400M	2,4	530	4
R91-2436M	2,4	536	4



R91-3242M	3,2	608	4
-----------	-----	-----	---

Размеры(мм):

A	B	C
505	475	168

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модель R420-24A.

Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity – R для фиксации таза, выполненной из термопластика Klarity Green с рисунком перфорации для IMRT, представлен на рисунке ниже.

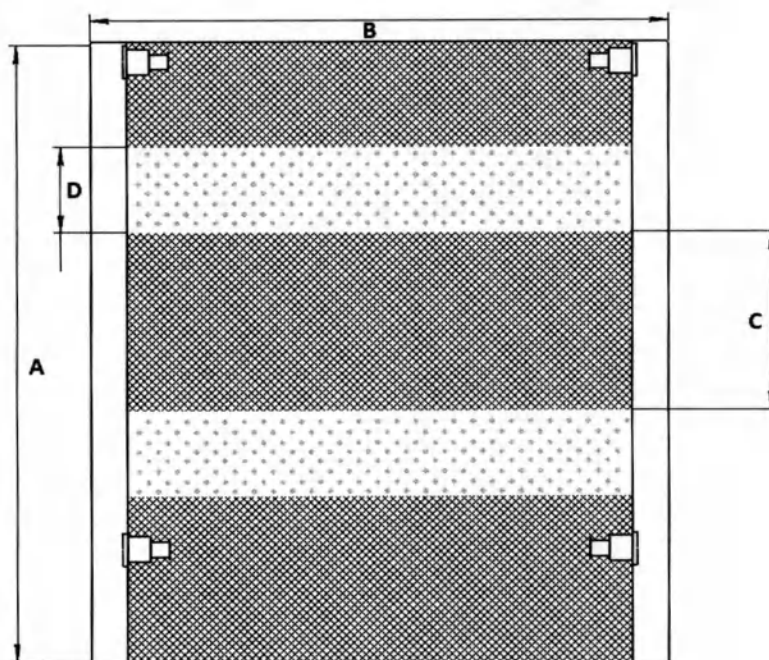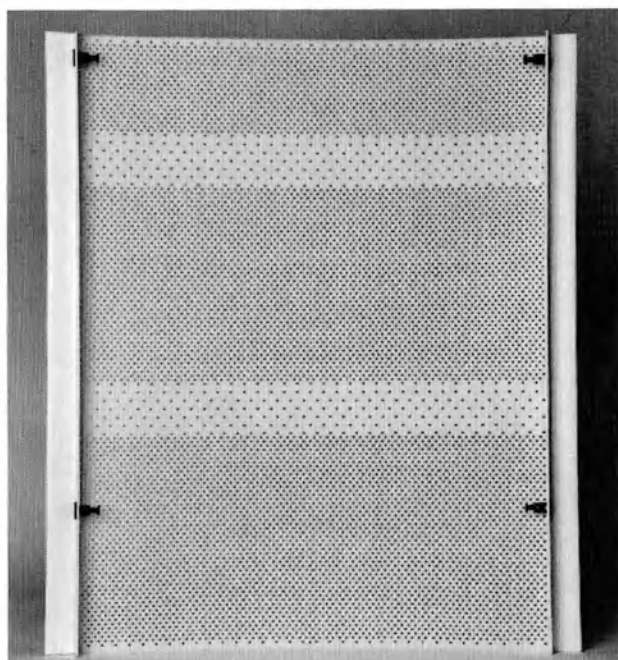

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R420-24A*	2,4	530	4


Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).


Размеры(мм):

A	B	C	D
560	460	155	71

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модель R920-24A.

Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity – R для фиксации таза с паховым зажимом, выполненной из термопластика Klarity Green с рисунком перфорации для IMRT, представлен на рисунке ниже.

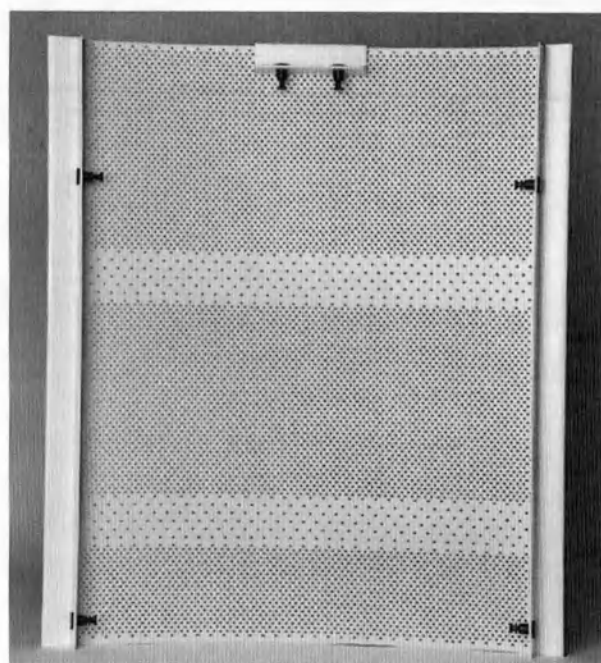

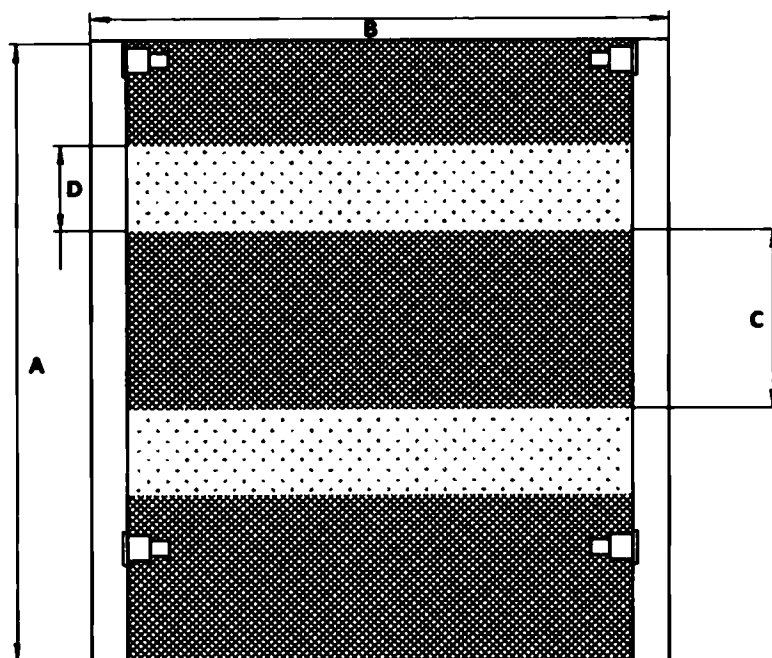

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R920-24A*	2,4	530	4



Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры(мм):

A	B	C	D
560	460	155	71

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модели RLG320-S24A, RLG320-S32A.

Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity – R для фиксации головы, шеи, груди и плеч, выполненной из термопластика Klarity Green с рисунком перфорации для IMRT, представлен на рисунке ниже.

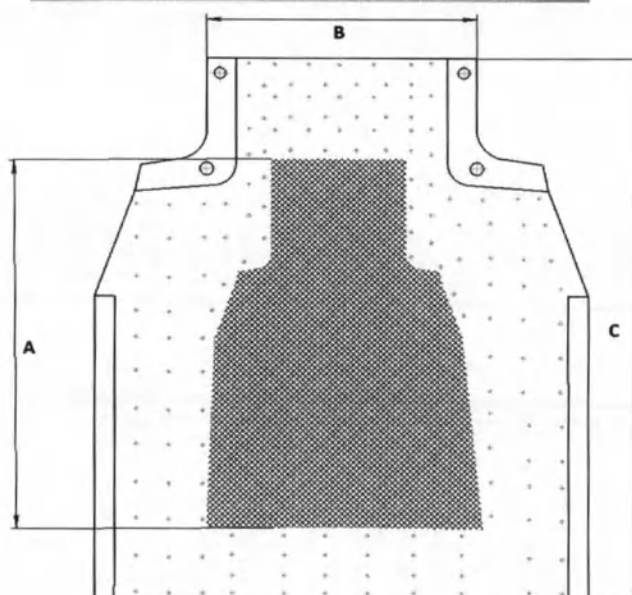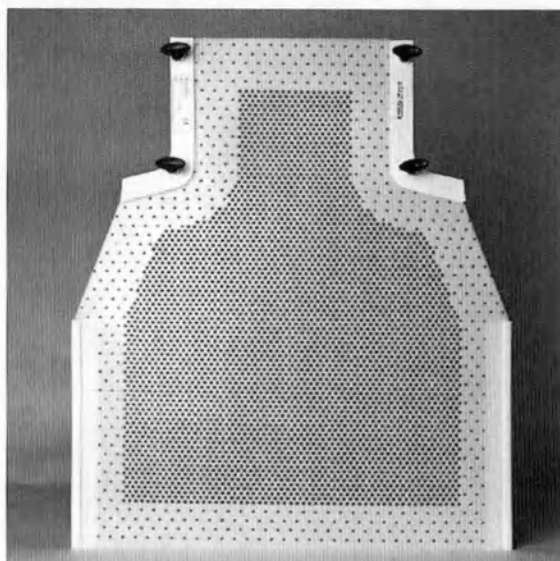

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RLG320-S24A*	2,4	530	4
RLG320-S32A*	3,2	536	4


Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры(мм):

A	B	C
390	360	560

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модель R322-S424C1-L

Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity-R для фиксации головы и грудной клетки, выполненной из термопластика Klarity White представлен на рисунке ниже.


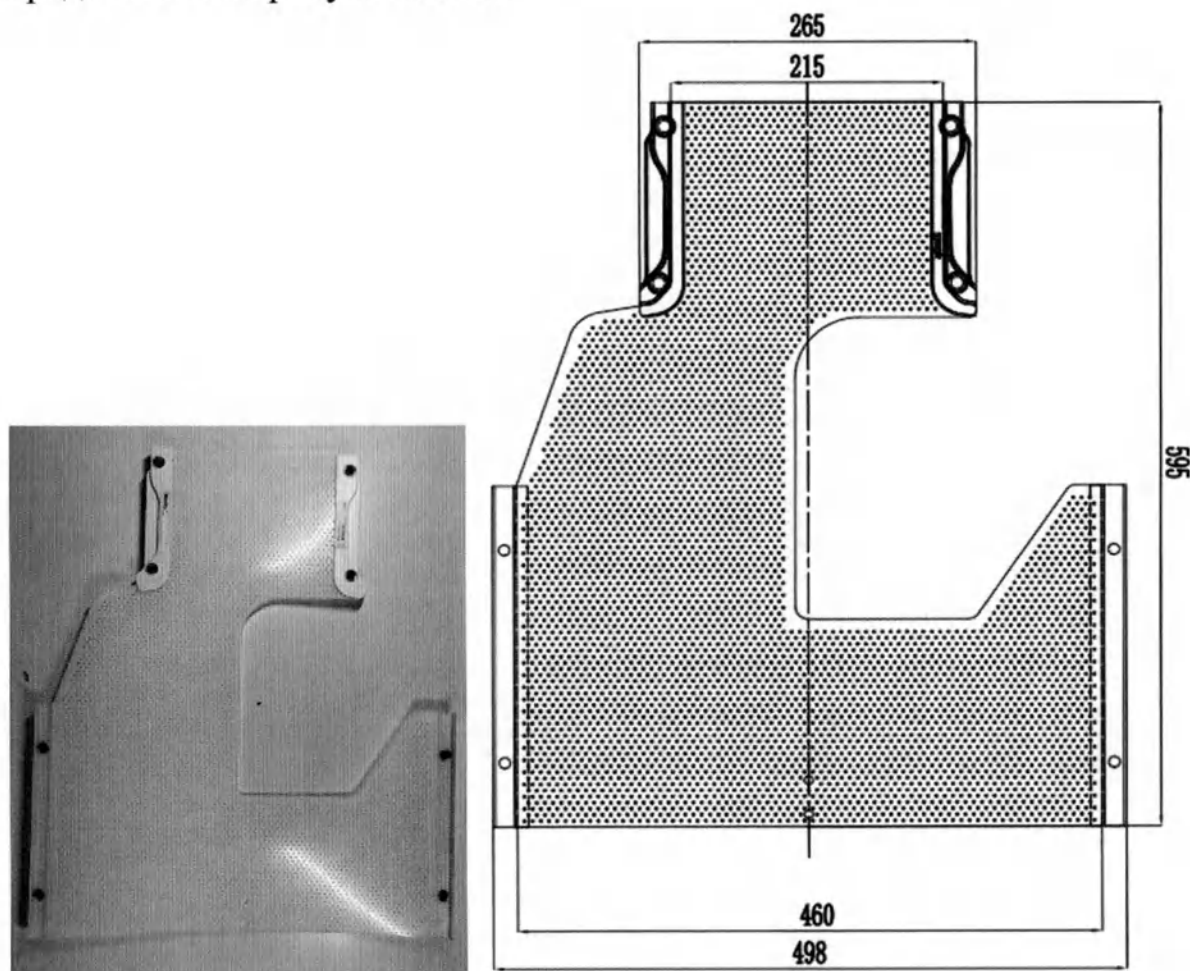


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R322-S424C1-L	2,4	530	1

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модель R322-S424C1-R

Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity-R для фиксации головы и грудной клетки, выполненной из термопластика Klarity White представлен на рисунке ниже.

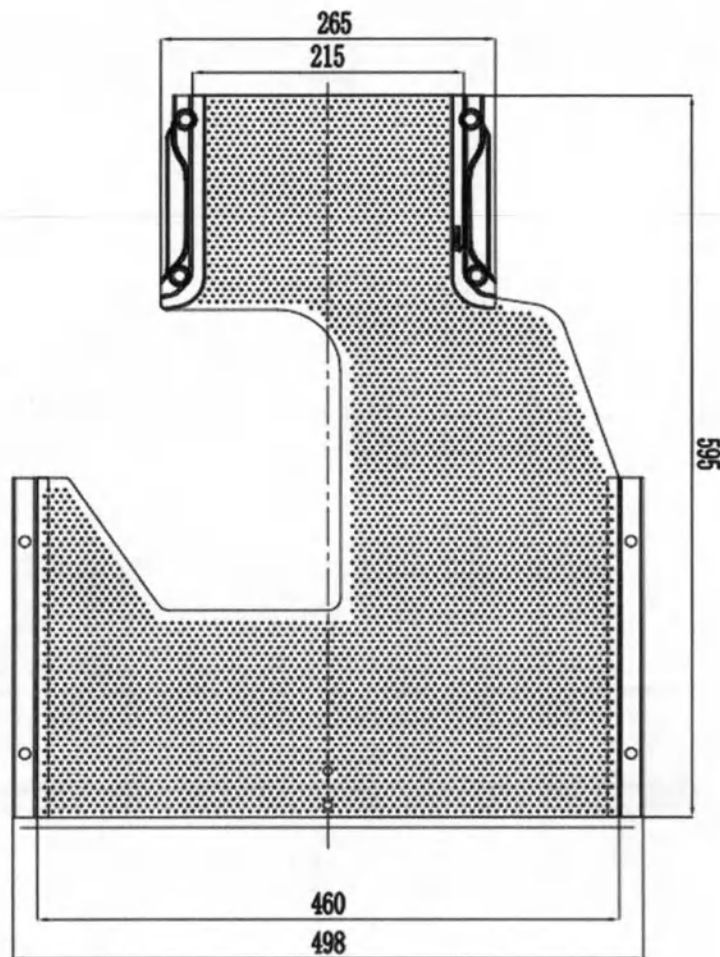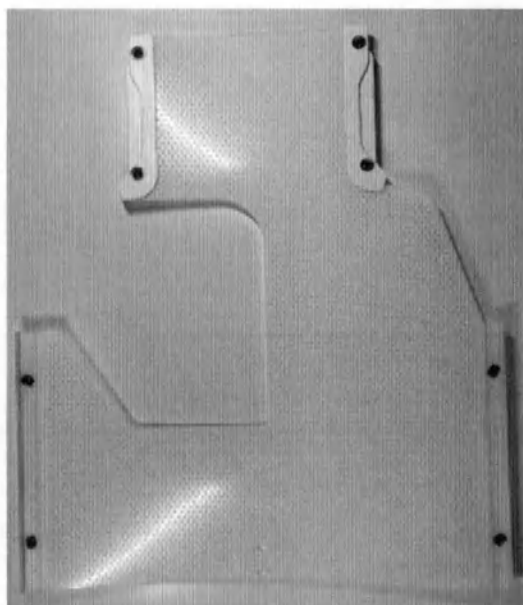


Основные технические характеристики:


Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R322-S424C1-R	2,4	530	1

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модели: R902-3242Q1, R902-2436Q1


Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity-R для фиксации тела из термопластика Klarity White представлен на рисунке ниже.

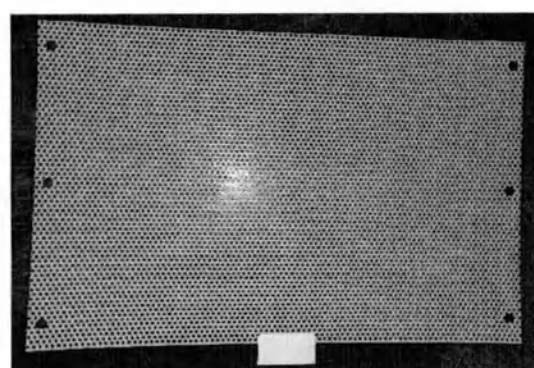

R902-3242Q1

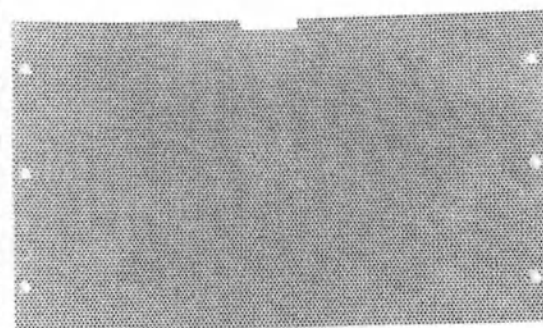

R902-2436Q1

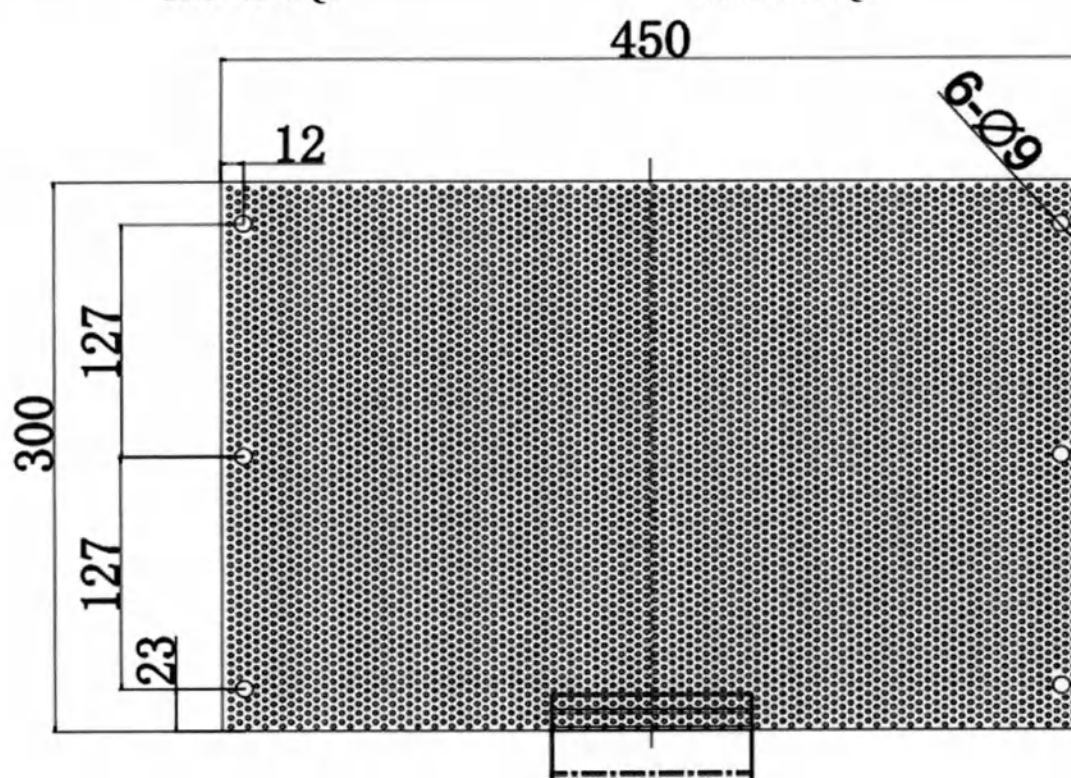


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R902-3242Q1	3,2	338	1
R902-2436Q1	2,4	320	1

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модель R902-32NQ1

Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity-R для фиксации тела без перфорации из термопластика Klarity White представлен на рисунке ниже.


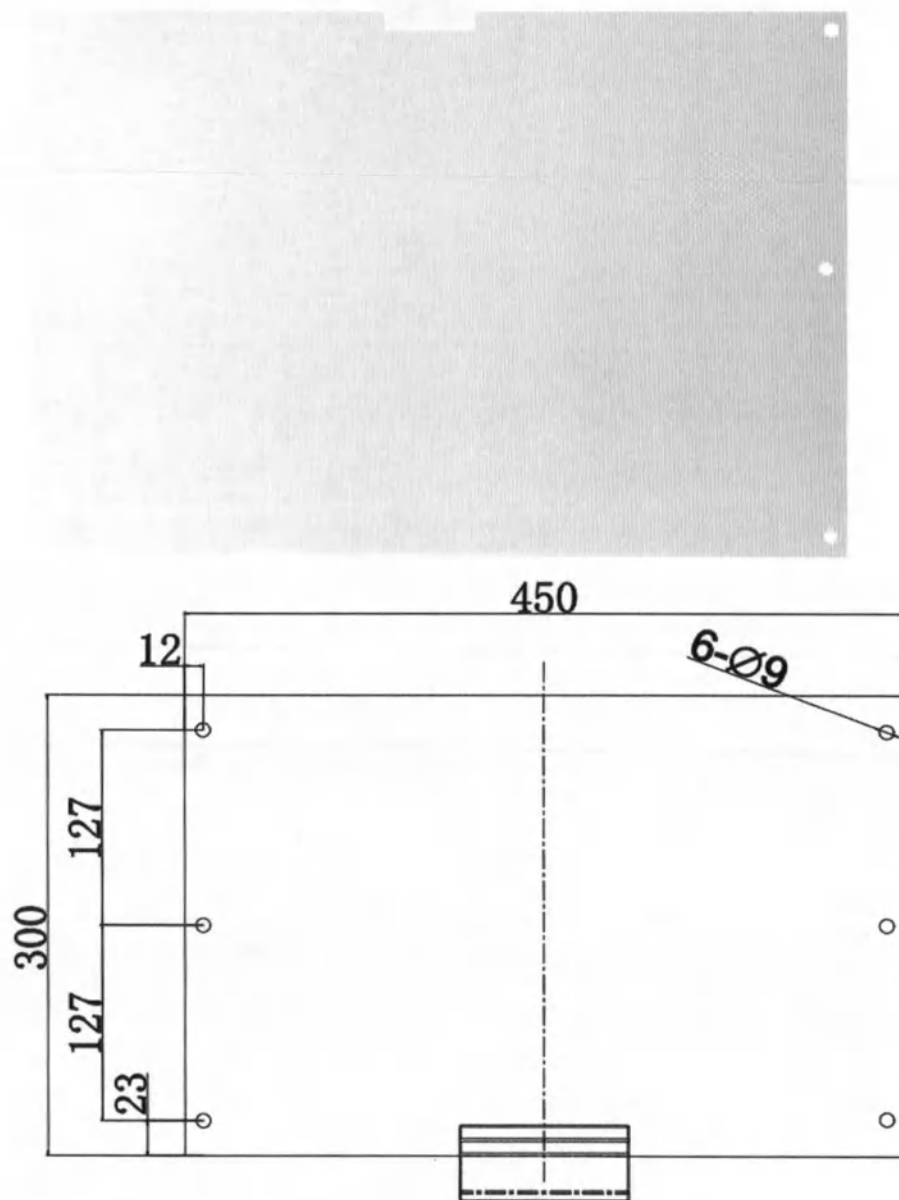


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R902-32NQ1	3,2	410	1

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модель R902-3242Q2

Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity-R для фиксации тела с перфорацией из термопластика Klarity White представлен на рисунке ниже.

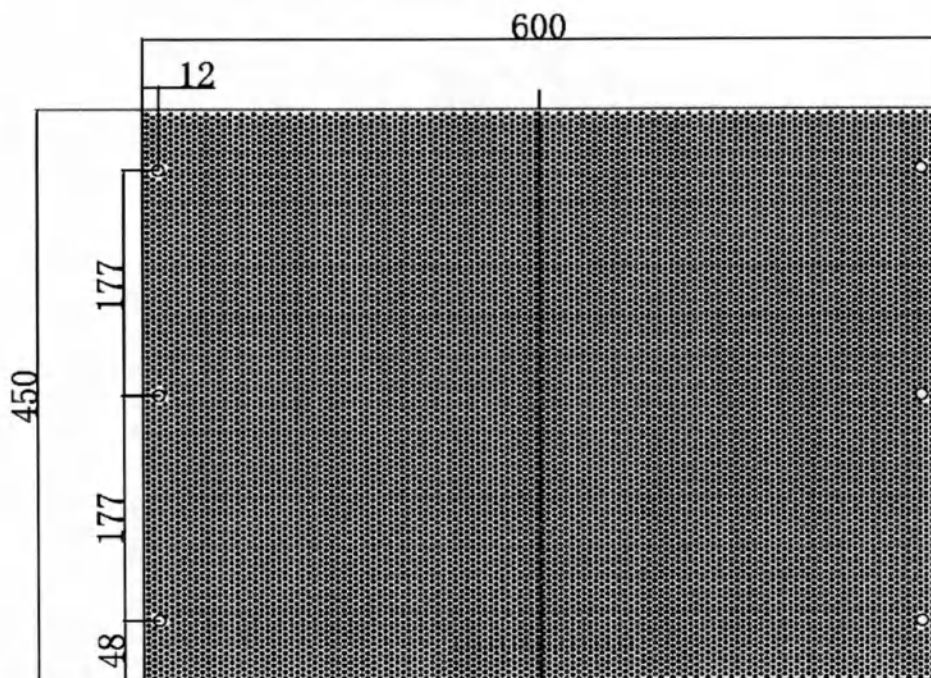
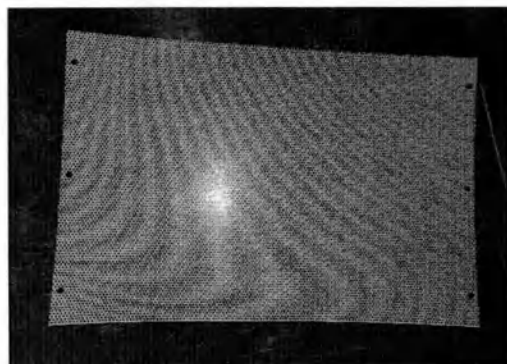


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R902-3242Q2	3,2	590	1

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модель R902-2436Q2

Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity-R для фиксации тела из термопластика Klarity White представлен на рисунке ниже.

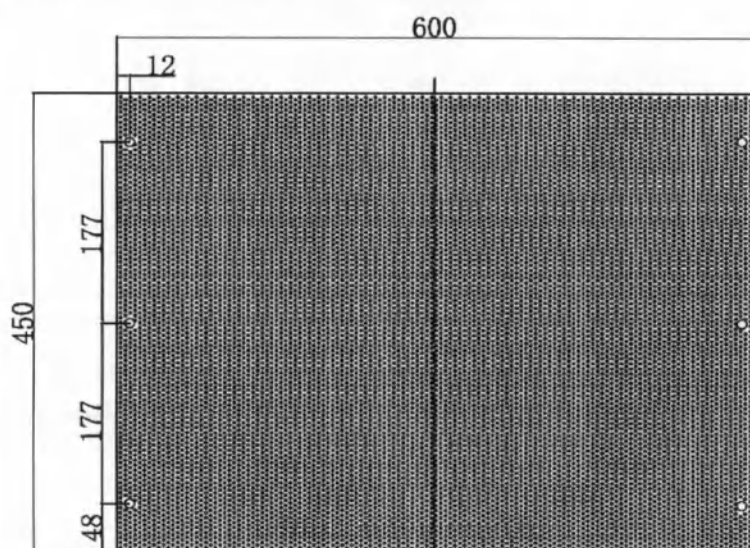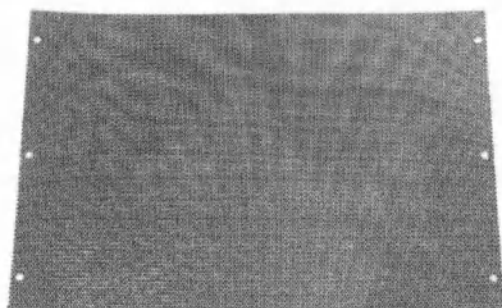


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R902-2436Q2	2,4	580	1

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модель R902-32NQ2

Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity-R для фиксации тела без перфорации из термопластика Klarity White представлен на рисунке ниже.

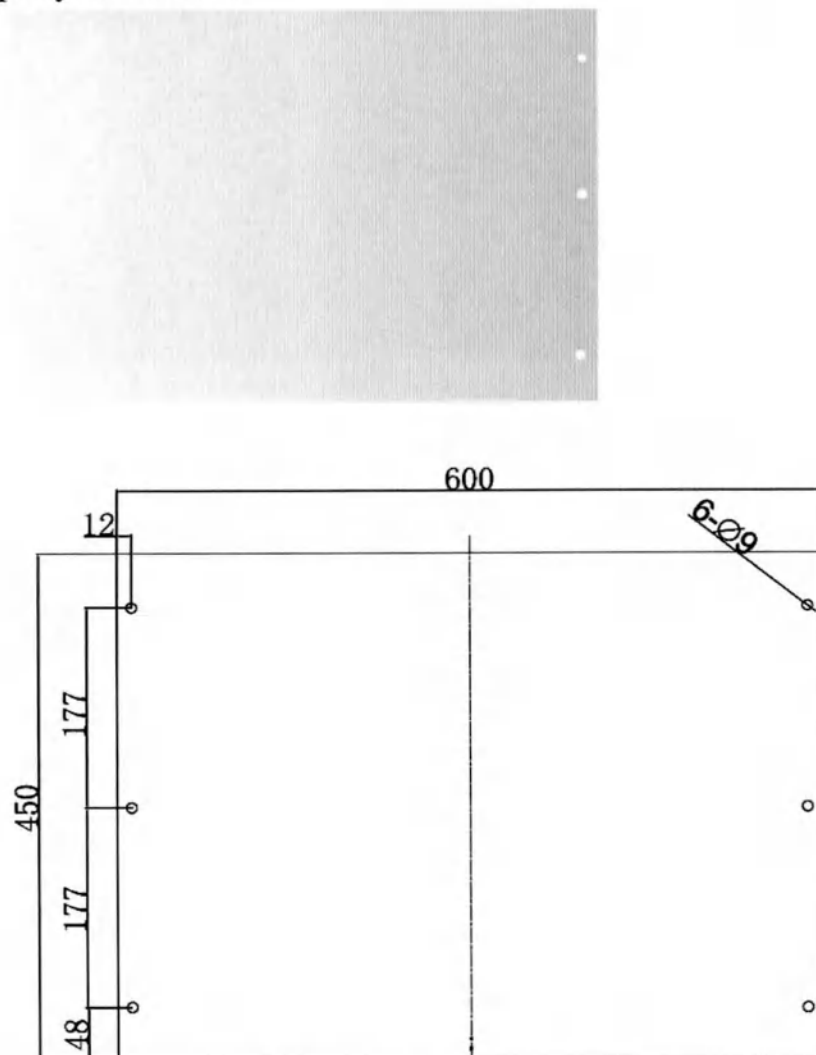


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R902-32NQ2	3,2	605	1

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модель R902-3242Q2L

Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity-R для фиксации тела с паховым зажимом с перфорацией из термопластика Klarity White представлен на рисунке ниже.


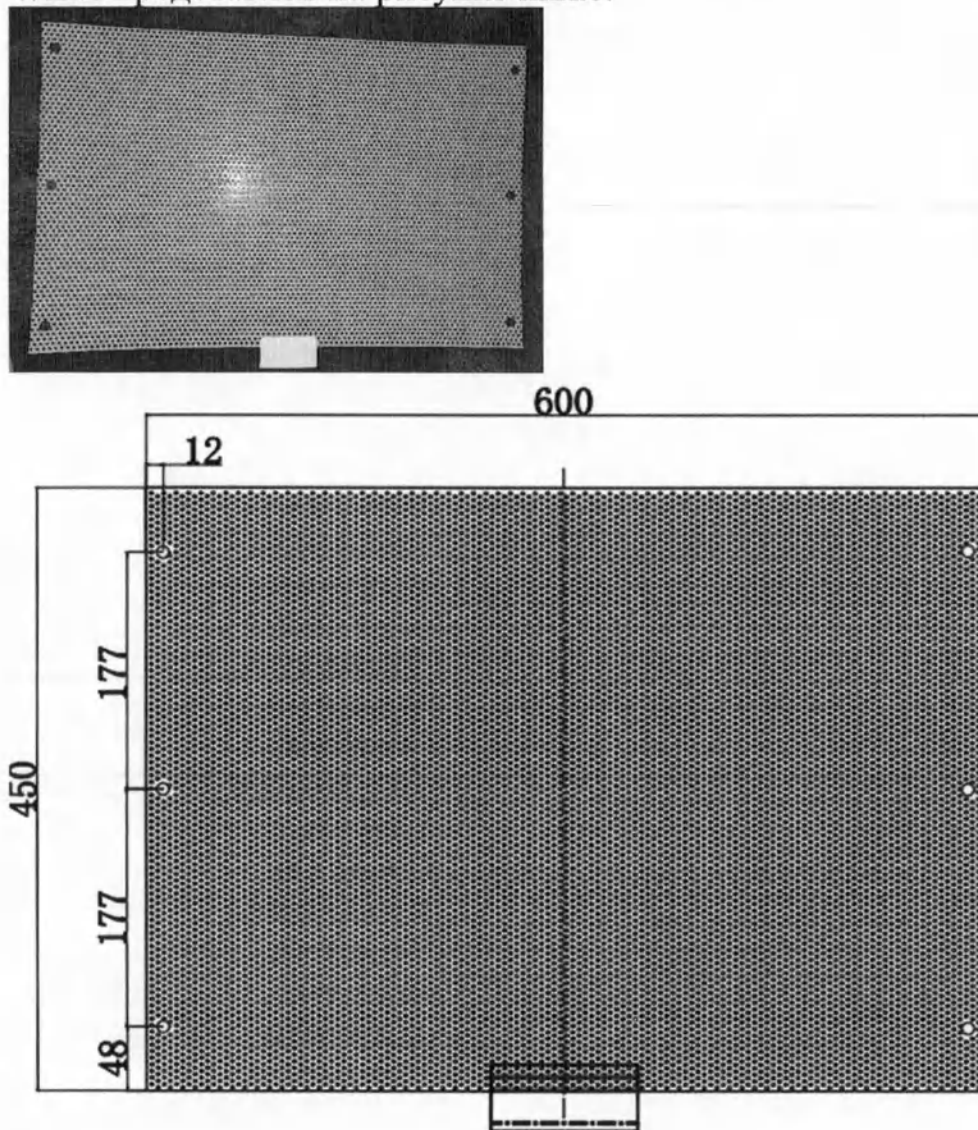


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R902-3242Q2L	3,2	598	1

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модель R902-2436Q2L

Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity-R для фиксации тела с паховым зажимом из термопластика Klarity White представлен на рисунке ниже.

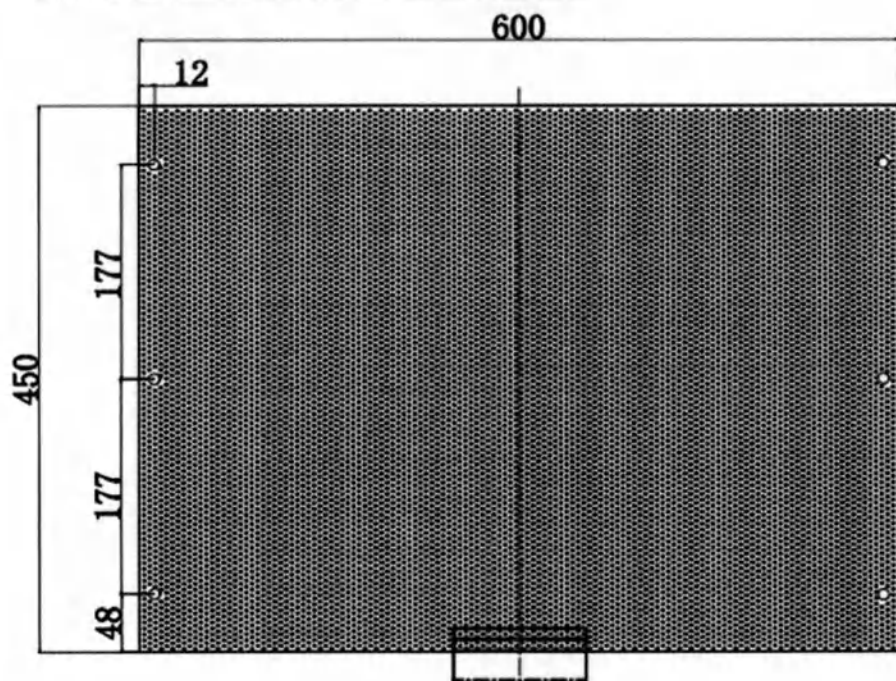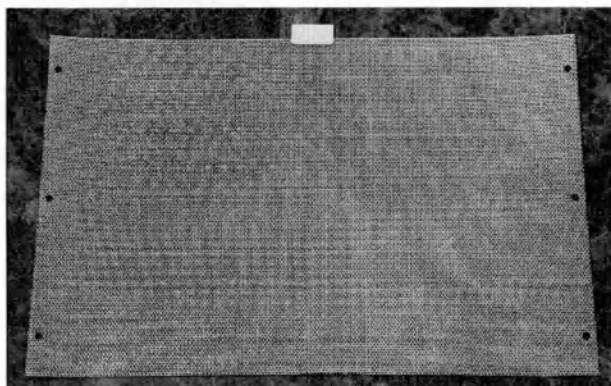


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R902-2436Q2L	2,4	590	1

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модель R902-32NQ2L

Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity-R для фиксации тела с паховым зажимом без перфорации из термопластика Klarity White представлен на рисунке ниже.


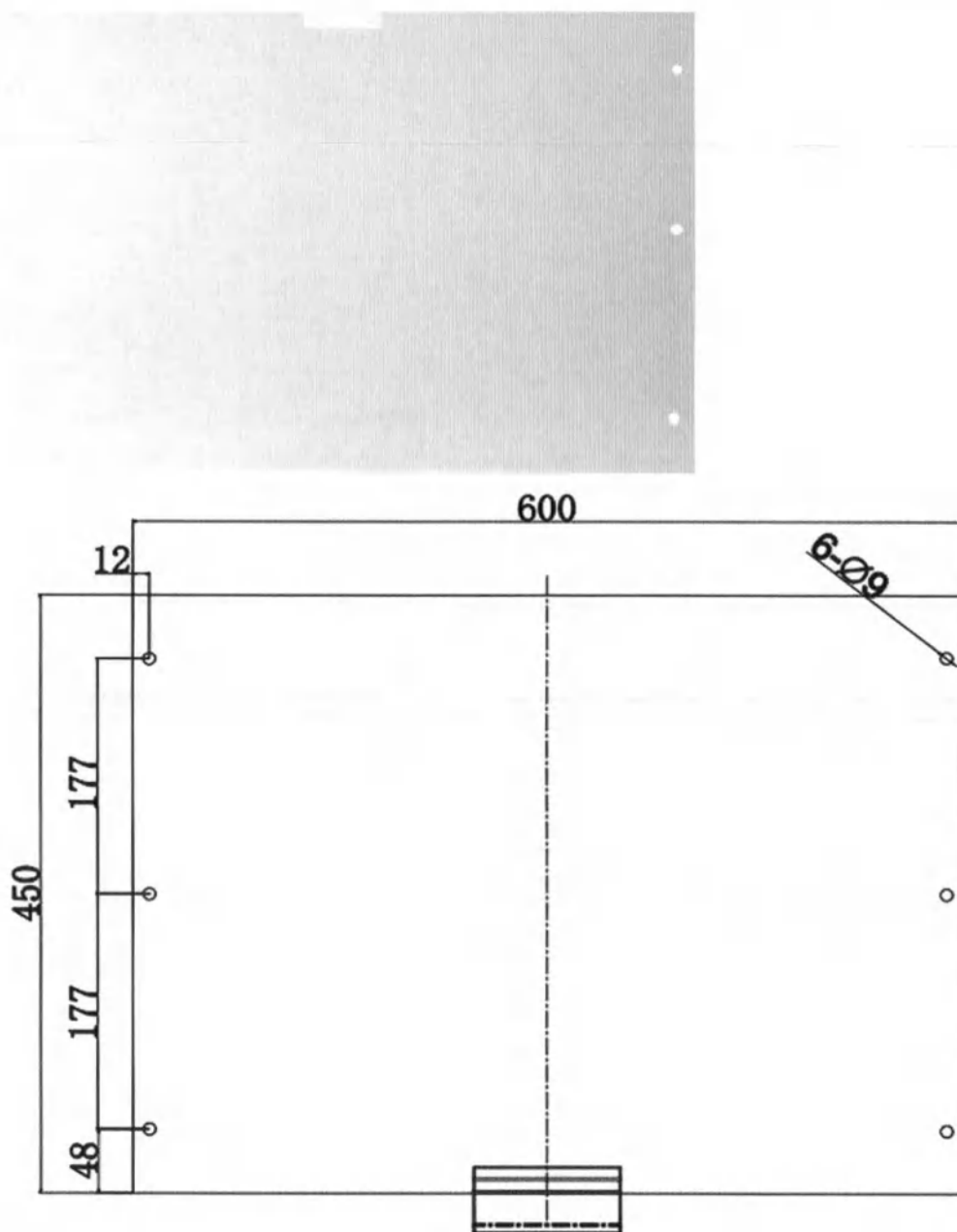


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R902-32NQ2L	3,2	610	1

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модель RLG902-2436BA

Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity-R для фиксации тела из термопластика Klarity Lite Green представлен на рисунке ниже.

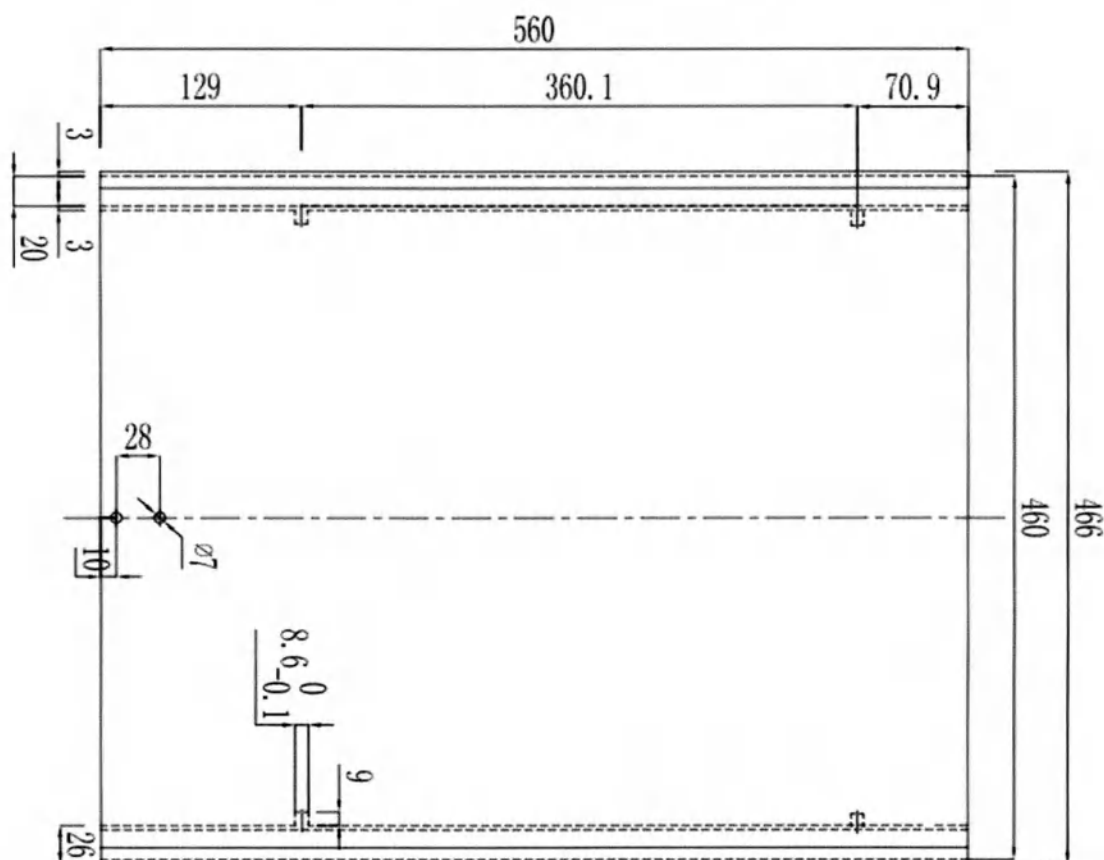
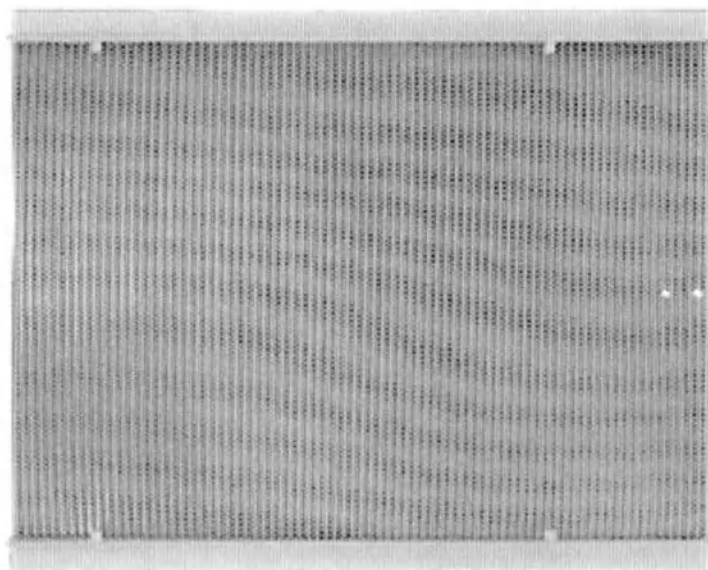


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RLG902-2436BA	2,4	528	1

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R, модель RLG902-2436TL

Внешний вид маски термопластической с креплением типа Klarity-R для фиксации тела из термопластика Klarity Lite Green представлен на рисунке ниже.

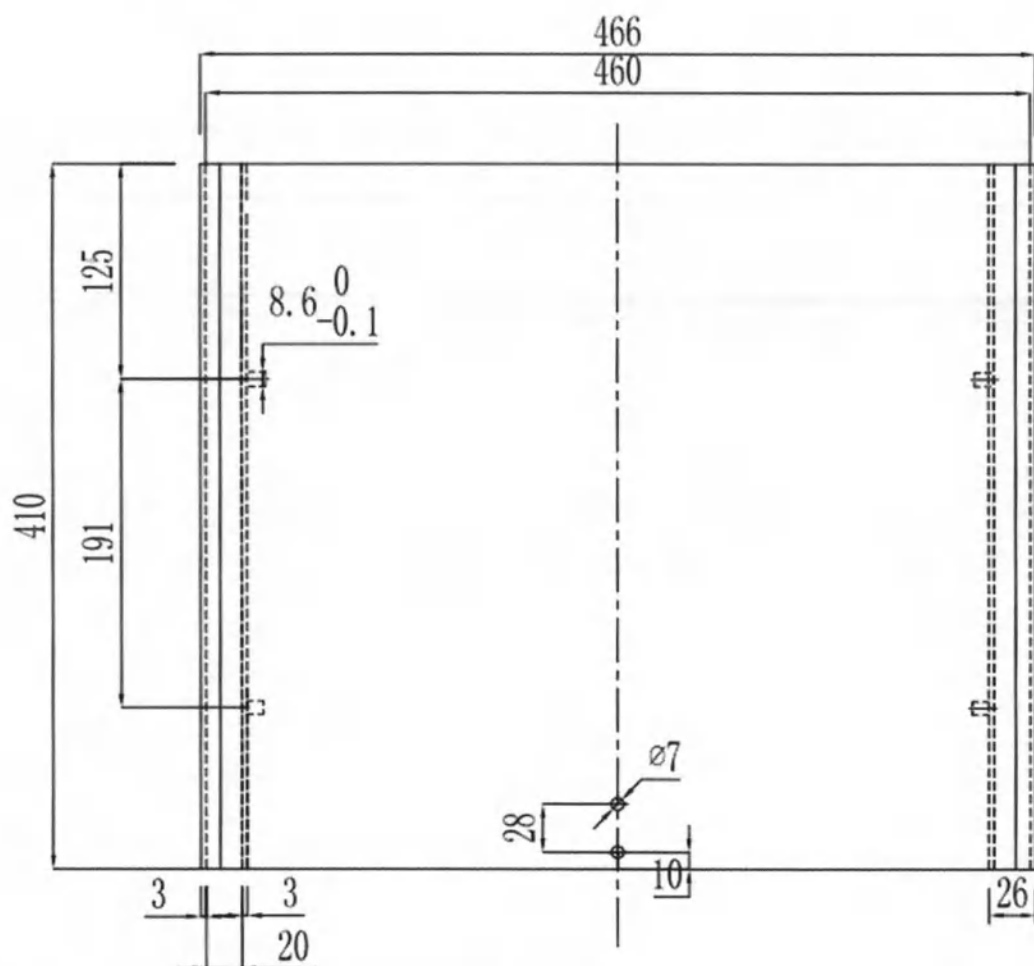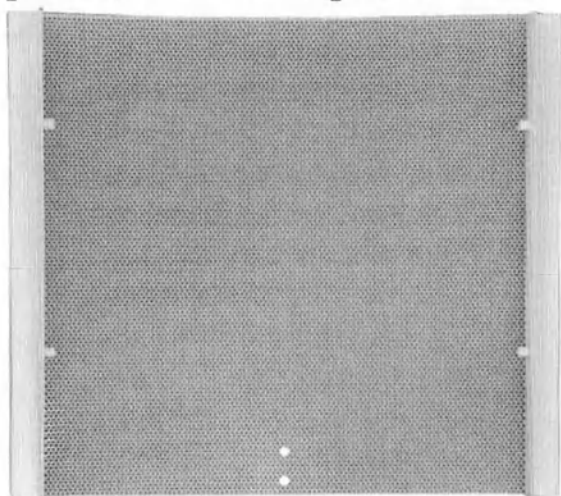


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RLG902-2436TL	2,4	504	1


Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity-R:
планка прижимная для термопластических фиксаторов многоразовая и
удлиненная планка прижимная для термопластических фиксаторов
многоразовая

Планка прижимная для термопластических фиксаторов многоразовая

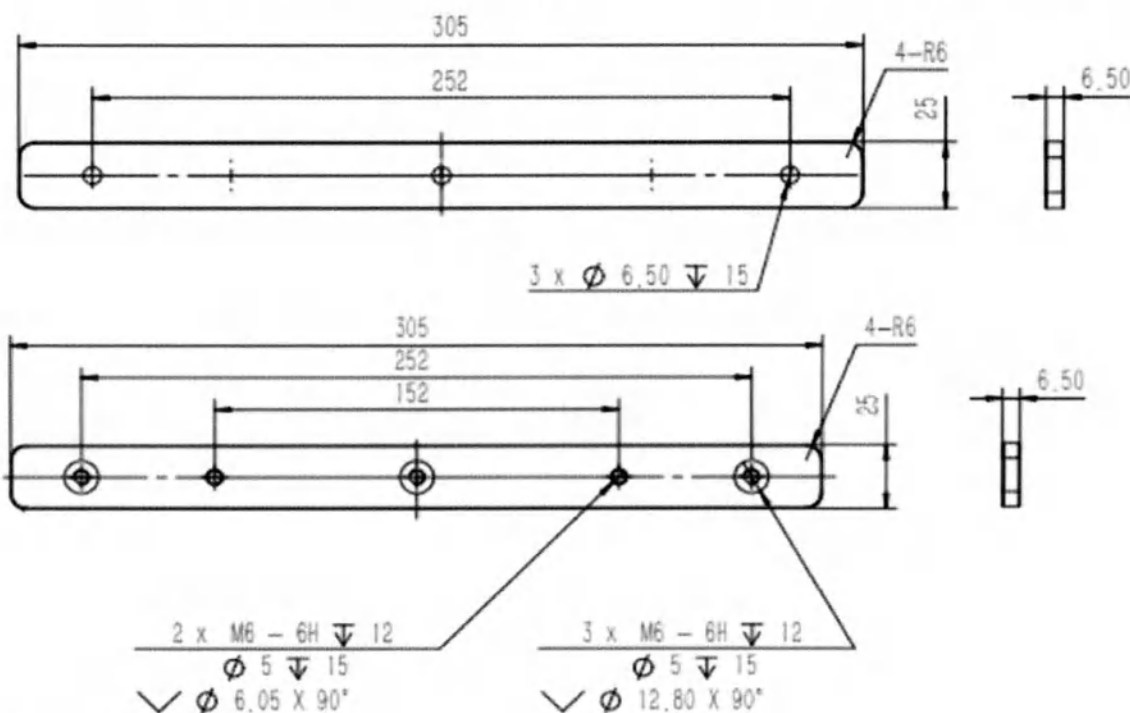

Масса 173 г

Планка прижимная для термопластических фиксаторов многоразовая удлиненная

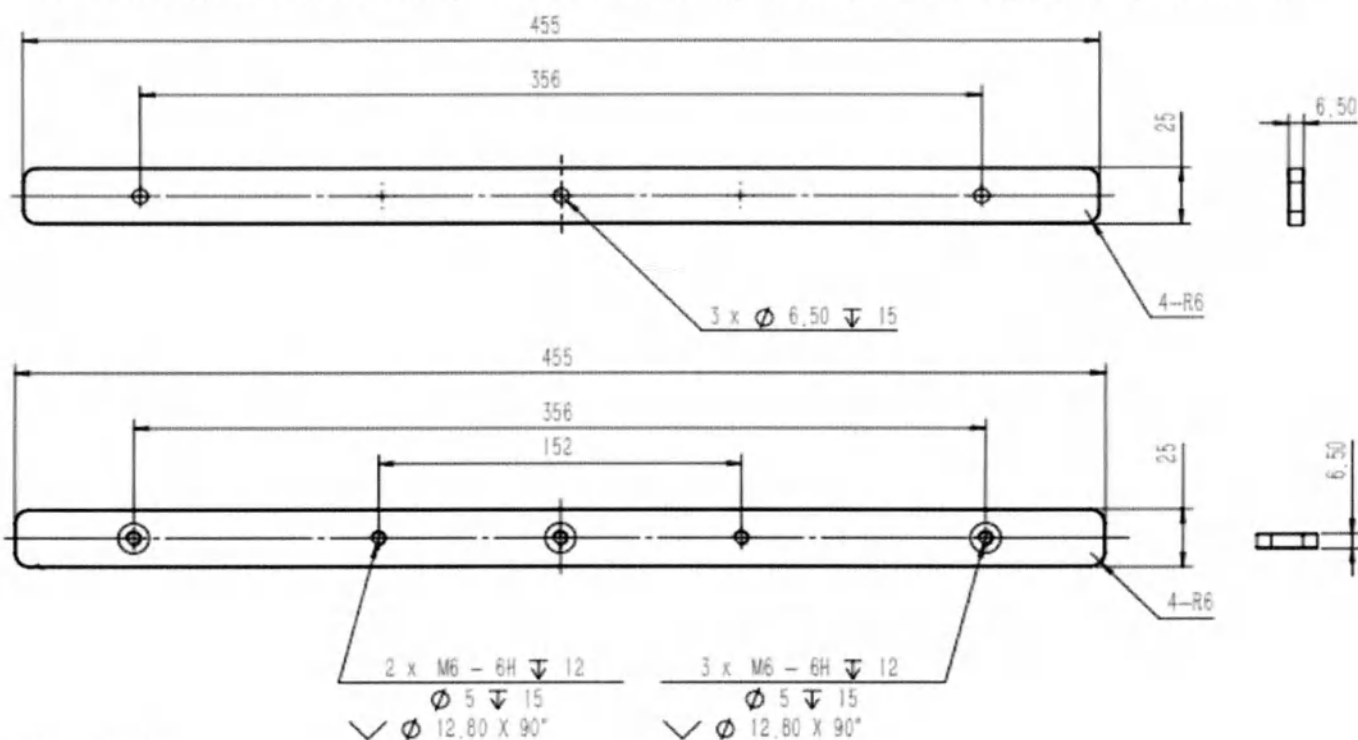


Масса 195 г

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab


Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модель R406-1.

Состав маски термопластической для фиксации головы с креплением типа Brainlab Type A, выполненной из термопластика Klarity White представлен на рисунке ниже.

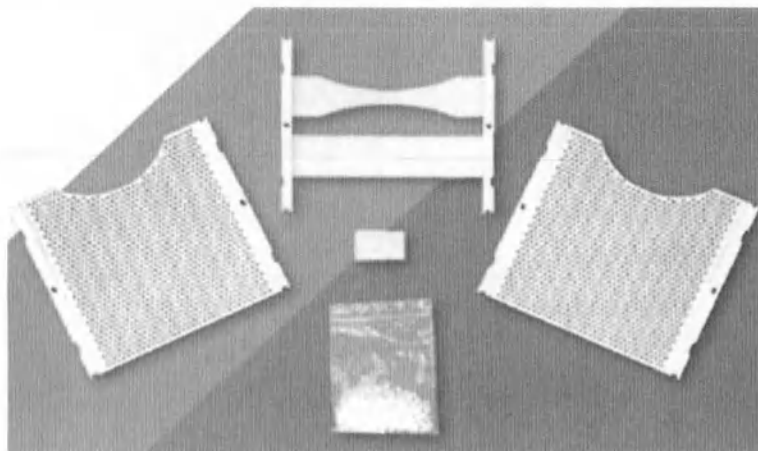

Состав:

- Верхняя маска термопластическая Klarity R406-1
- Нижняя маска термопластическая Klarity R406-1
- Средняя маска термопластическая Klarity R406-1
- Гранулы сыпучие, 1 упаковка
- Фиксатор для зубов

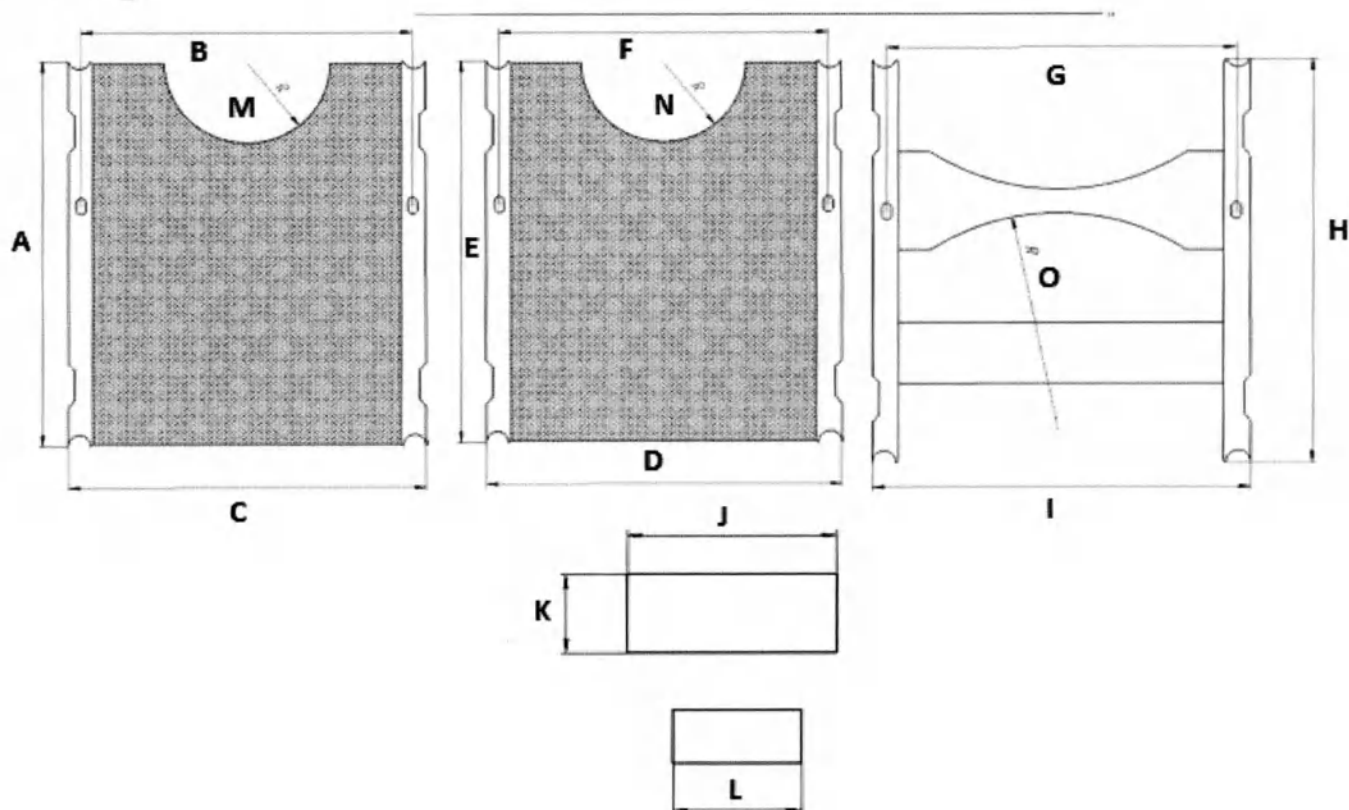

Основные технические характеристики:

Модель	Масса, г	Упаковка, шт
R406-1	530	10

Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
200	176	185	185	200	176	176	200	185	110	40	60	45	45	115


Гранулы сыпучие:

Диаметр, мм: $5 \pm 0,5$ мм.

Давление на ткани: не более 5Н.


Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модель R406-3.

Состав маски термопластической для фиксации головы с креплением типа Brainlab Type A, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White представлен на рисунке ниже.

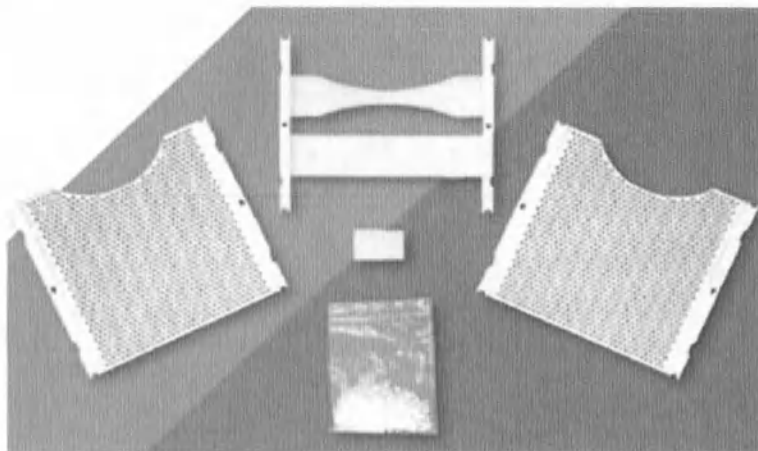

Состав:

- Верхняя маска термопластическая Klarity R406-3
- Нижняя маска термопластическая Klarity R406-3
- Средняя маска термопластическая Klarity R406-3
- Гранулы сыпучие, 1 упаковка
- Фиксатор для зубов

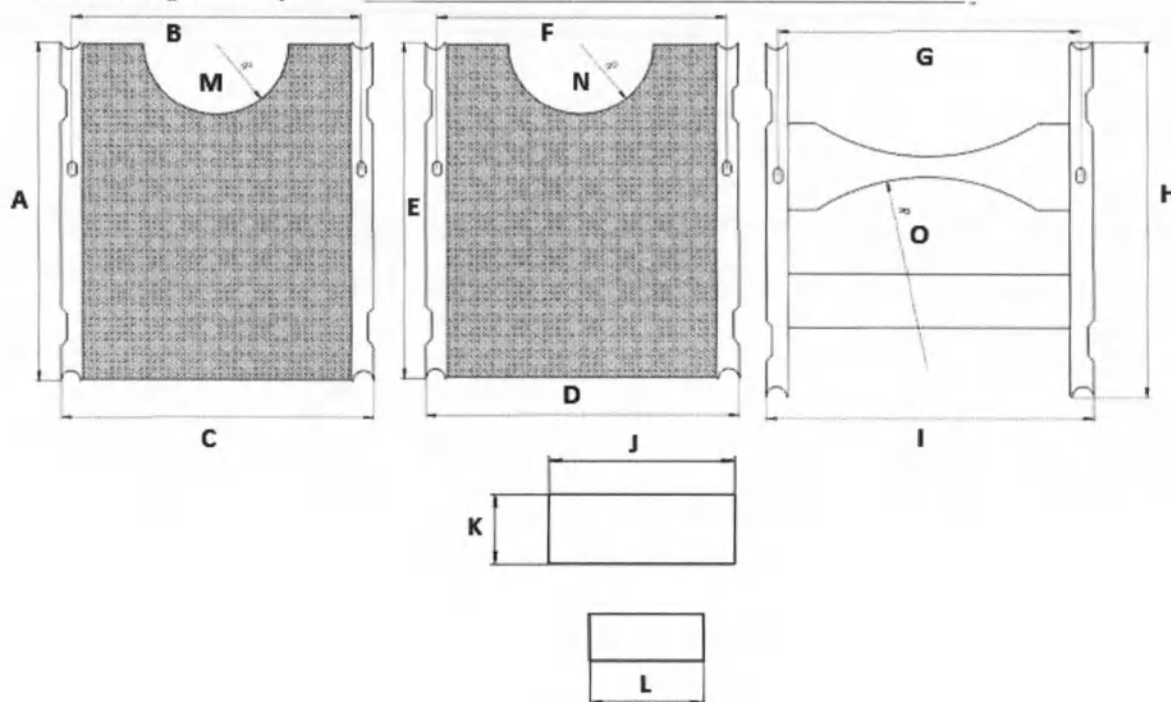

Основные технические характеристики:

Модель	Масса, г	Упаковка, шт
R406-3	512	10

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
200	176	187	187	200	176	176	200	187	110	40	60	45	45	115


Гранулы сыпучие:

Диаметр, мм: $5 \pm 0,5$ мм.

Давление на ткани: не более 5Н.


Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модели RG406-3.

Состав маски термопластической для фиксации головы с креплением типа Brainlab Type A, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White. Общий вид представлен на рисунке ниже.

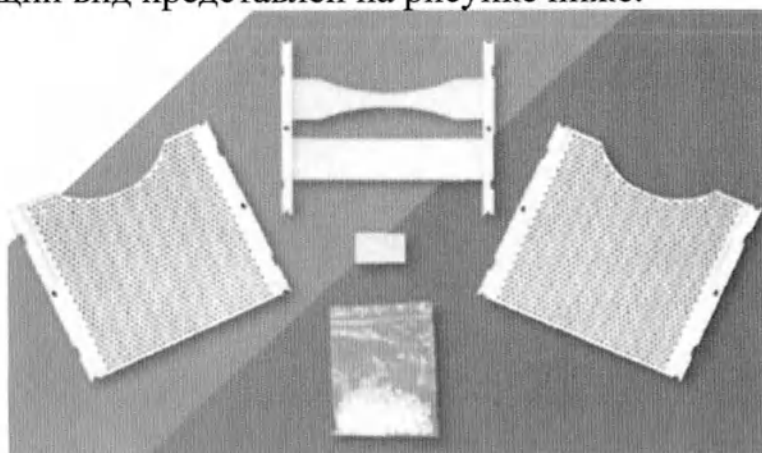

Состав:

- Верхняя маска термопластическая Klarity RG406-3
- Нижняя маска термопластическая Klarity RG406-3
- Средняя маска термопластическая Klarity RG406-3
- Гранулы сыпучие, 1 упаковка
- Фиксатор для зубов

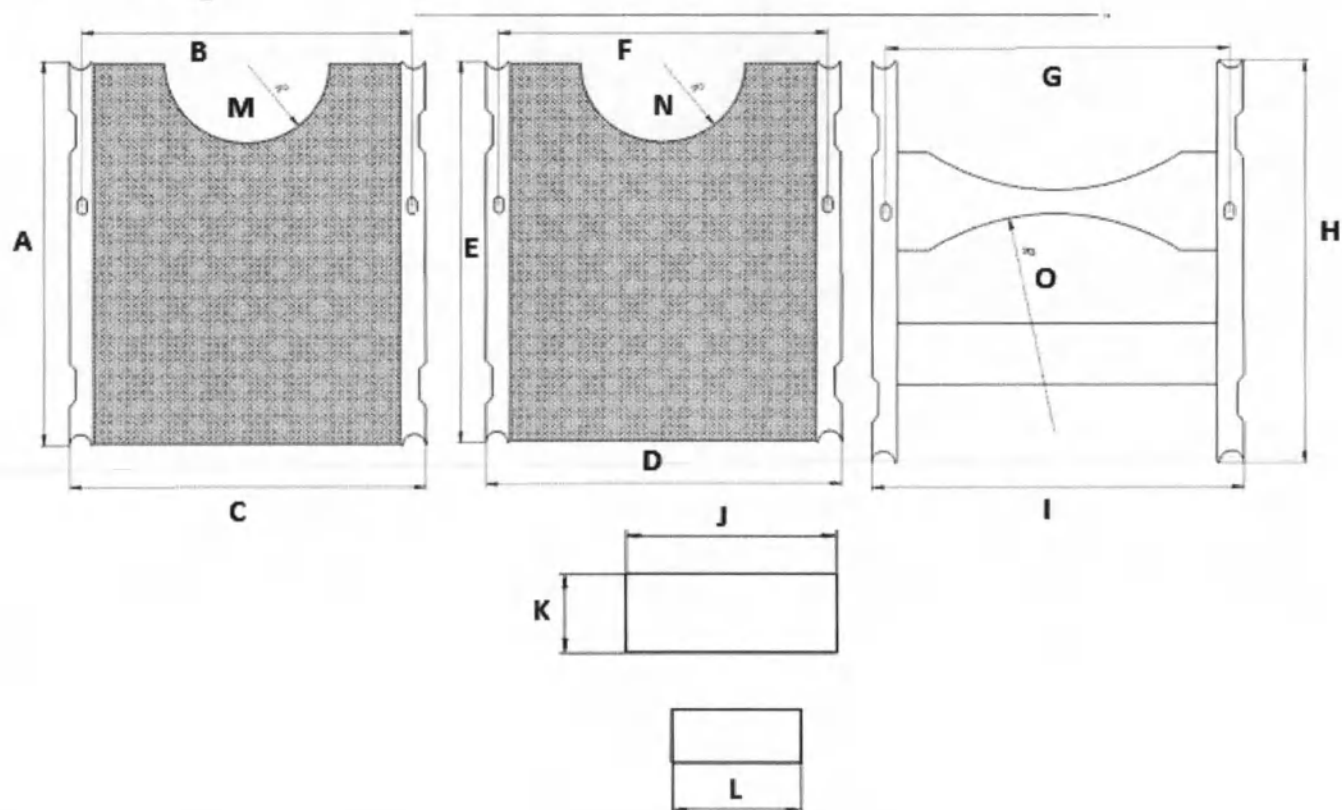

Основные технические характеристики:

Модель	Масса, г	Упаковка, шт
RG406-3*	530	10

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
200	176	187	187	200	176	176	200	187	110	40	60	45	45	115


Гранулы сыпучие:

Диаметр, мм: $5 \pm 0,5$ мм.

Давление на ткани: не более 5Н.


Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модель R408.

Состав маски термопластической для фиксации головы с креплением типа Brainlab Type B, выполненной из термопластика Klarity White, представлен на рисунке ниже.

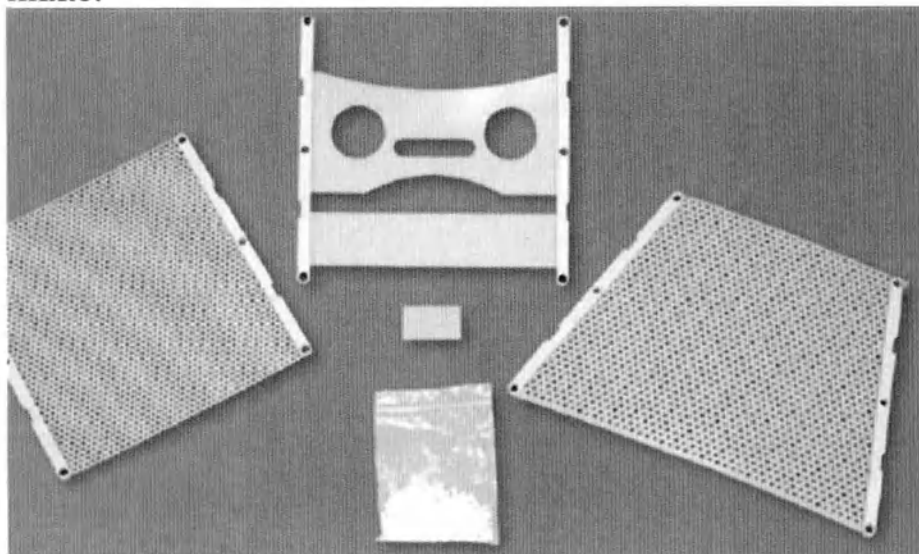

Состав:

- Верхняя маска термопластическая Klarity R408
- Нижняя маска термопластическая Klarity R408
- Средняя маска термопластическая Klarity R408
- Гранулы сыпучие, 1 упаковка
- Фиксатор для зубов

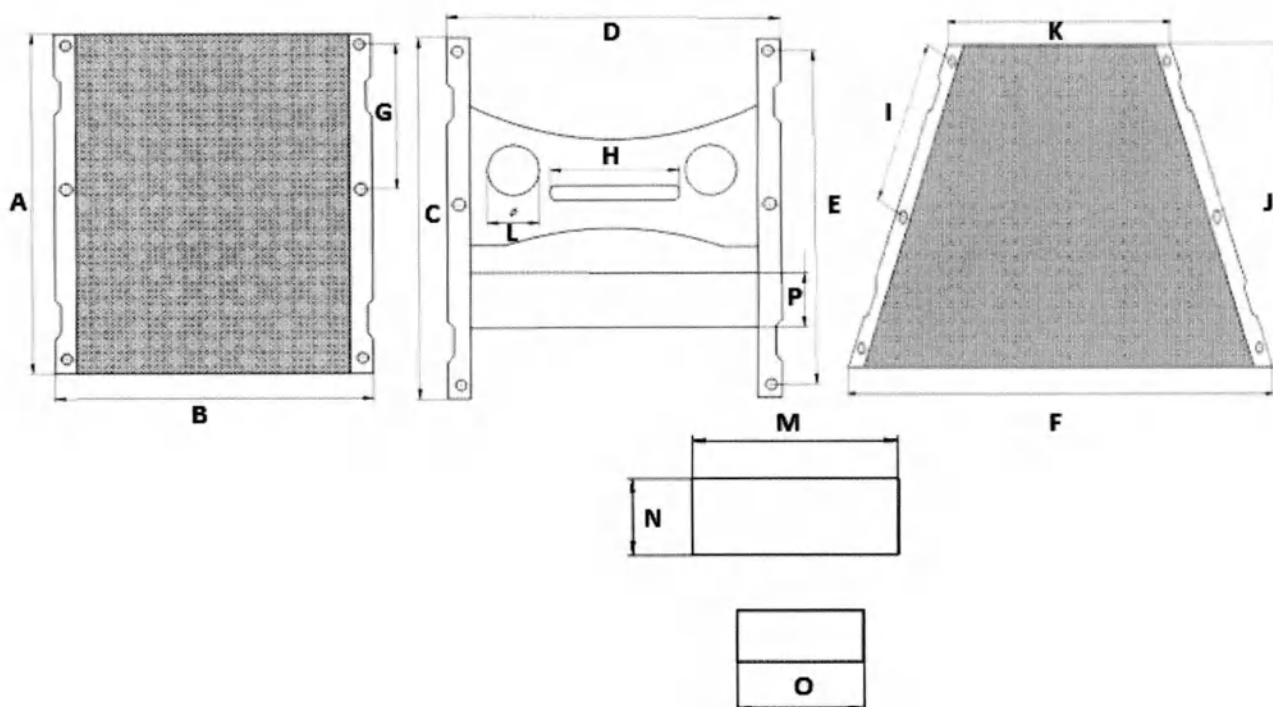

Основные технические характеристики:

Модель	Масса, г	Упаковка, шт
R408	530	10

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
29	21	29	21	20	21	14	15	15	29	12	1	11	4	6	3
0	4	0	4	0	4	5	0	5	0	0	5	0	0	0	0


Гранулы сыпучие:

Диаметр, мм: $5 \pm 0,5$ мм.

Давление на ткани: не более 5Н.


Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модель RG408.

Состав маски термопластической для фиксации головы с креплением типа Brainlab Type B, выполненной из термопластика Klarity Green и термопластика Klarity White, представлен на рисунке ниже.

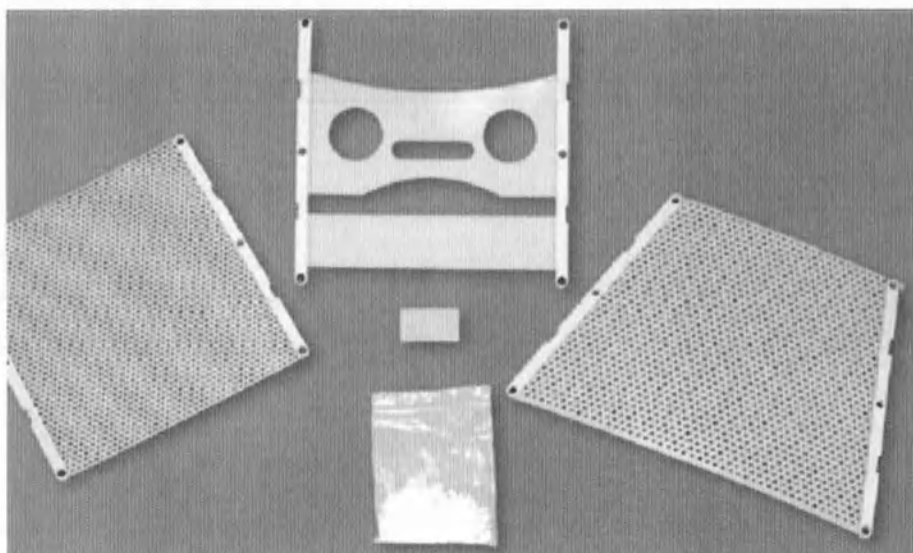

Состав:

- Верхняя маска термопластическая Klarity RG408
- Нижняя маска термопластическая Klarity RG408
- Средняя маска термопластическая Klarity RG408
- Гранулы сыпучие, 1 упаковка
- Фиксатор для зубов

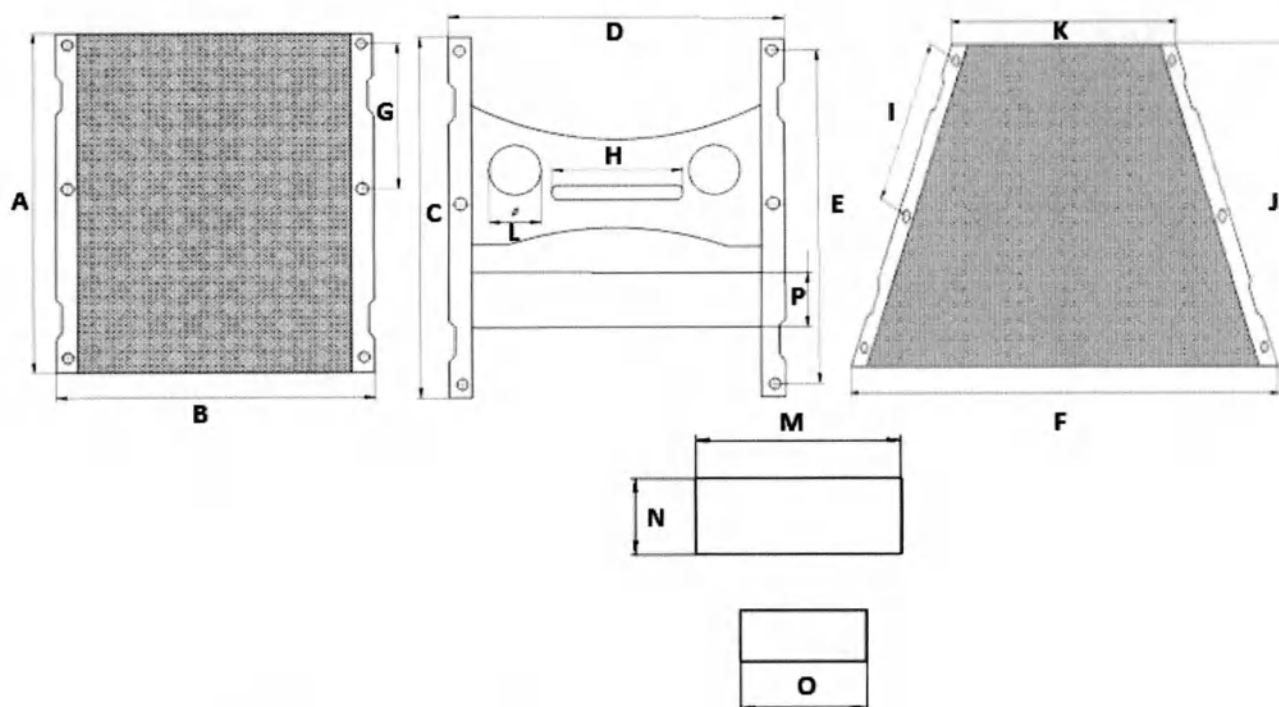

Основные технические характеристики:

Модель	Масса, г	Упаковка, шт
RG408*	530	10

Примечание - Маски, выполненные из термопластика Klarity Green отмечены (*).

Размеры(мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
29	21	29	21	20	21	14	15	15	29	12	1	11	4	6	3
0	4	0	4	0	4	5	0	5	0	0	5	0	0	0	0


Гранулы сыпучие:

Диаметр, мм: $5 \pm 0,5$ мм.

Давление на ткани: не более 5Н.


Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модель R408-2.

Состав маски термопластической для фиксации головы и плеч с креплением типа Brainlab Type B, выполненной из термопластика Klarity White, представлен на рисунке ниже.

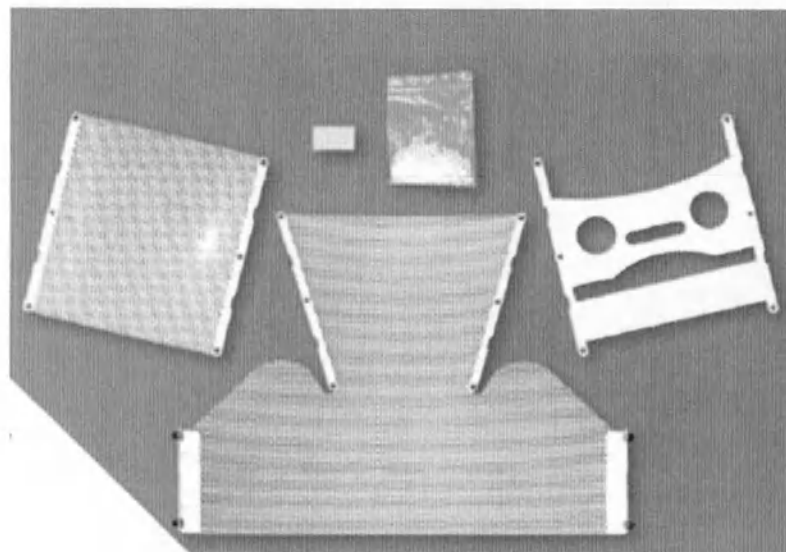

Состав:

- Верхняя маска термопластическая Klarity R408-2
- Нижняя маска термопластическая Klarity R408-2
- Средняя маска термопластическая Klarity R408-2
- Гранулы сыпучие, 1 упаковка
- Фиксатор для зубов

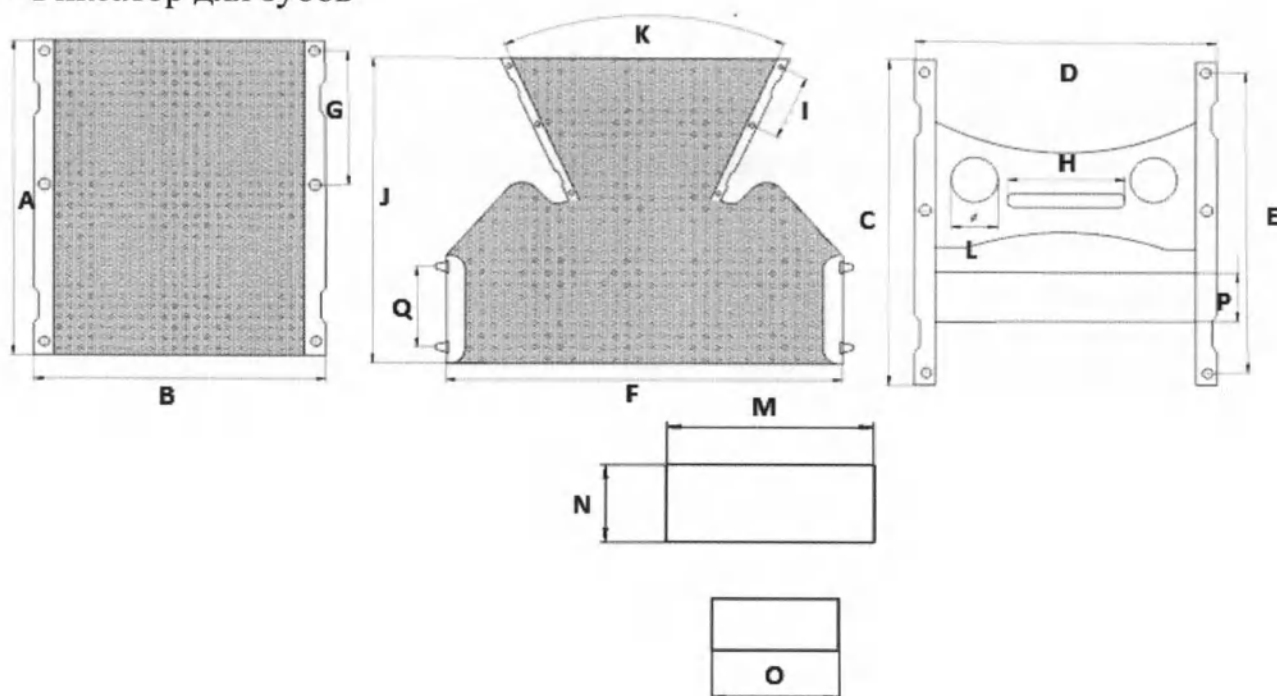

Основные технические характеристики:

Модель	Масса, г	Упаковка, шт
R408-2	735	10

Размеры (мм):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
220	185	220	185	210	195	115	120	35	220

K	L	M	N	O	P	Q
170	15	110	40	60	20	75


Гранулы сыпучие:

Диаметр, мм: $5 \pm 0,5$ мм.

Давление на ткани: не более 5Н.


Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модель R408A-1

Состав маски термопластической для фиксации головы с креплением типа Brainlab Type Dynamic, выполненной из термопластика Klarity White, представлен на рисунке ниже.

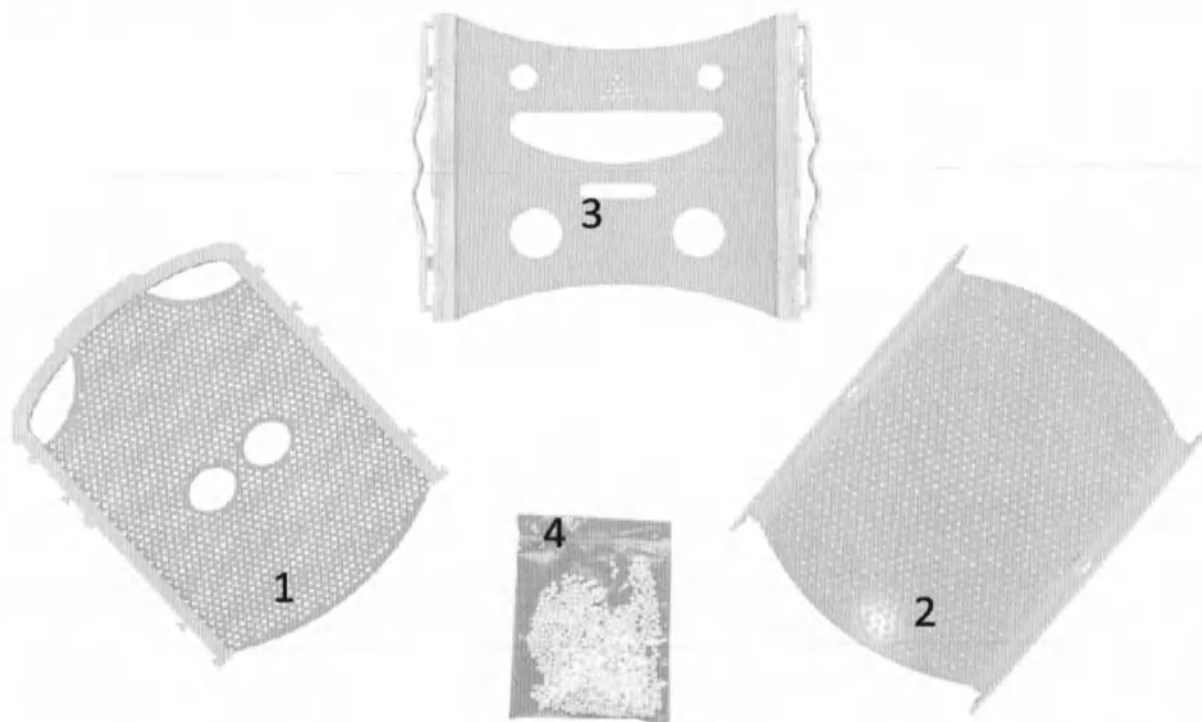

Состав:

- Верхняя маска термопластическая Klarity R408A-1 (на рисунке №1)
- Нижняя маска термопластическая Klarity R408A-1 (на рисунке №2)
- Средняя маска термопластическая Klarity R408A-1 (на рисунке №3)
- Гранулы сыпучие, 1 упаковка (на рисунке №4)

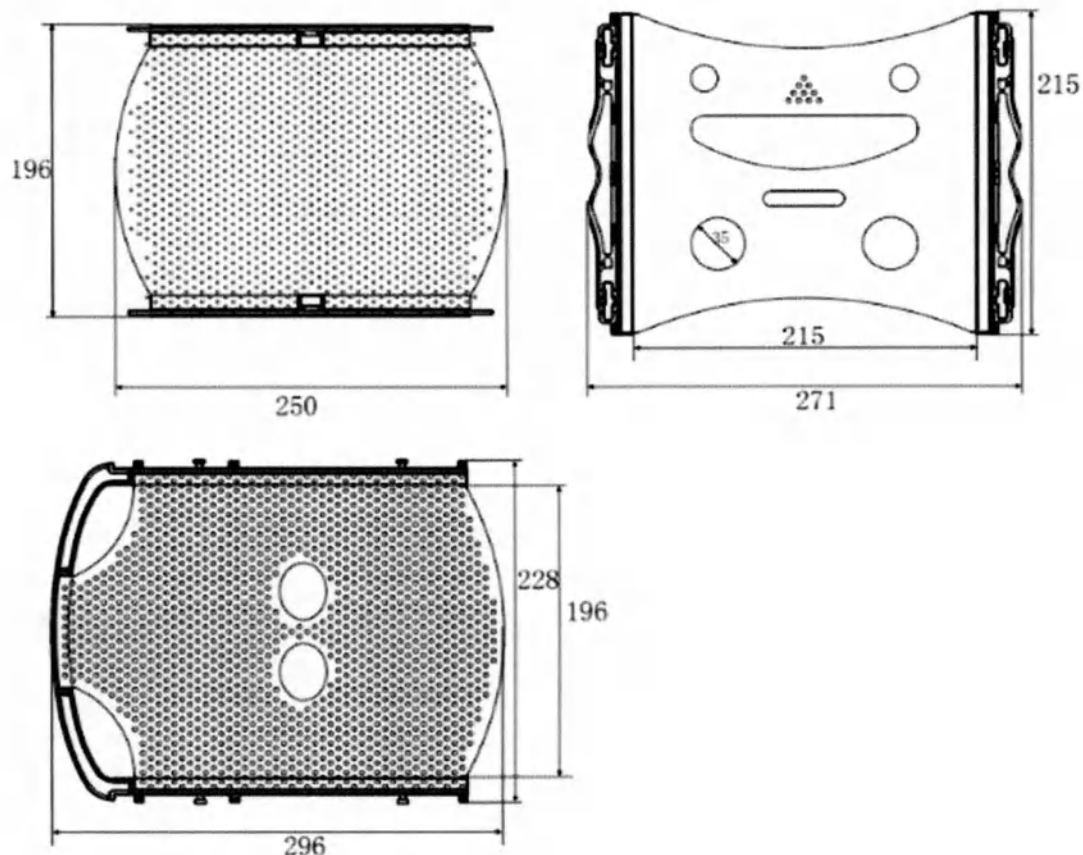

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
R408A-1	2,4	457	5


Гранулы сыпучие:

Диаметр, мм: $2,5 \pm 0,5$ мм.

Давление на ткани: не более 5Н.


Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BrainLab, модель RG408A-1

Состав маски термопластической для фиксации головы с креплением типа Brainlab Type Dynamic, выполненной из термопластика Klarity Green, представлен на рисунке ниже.

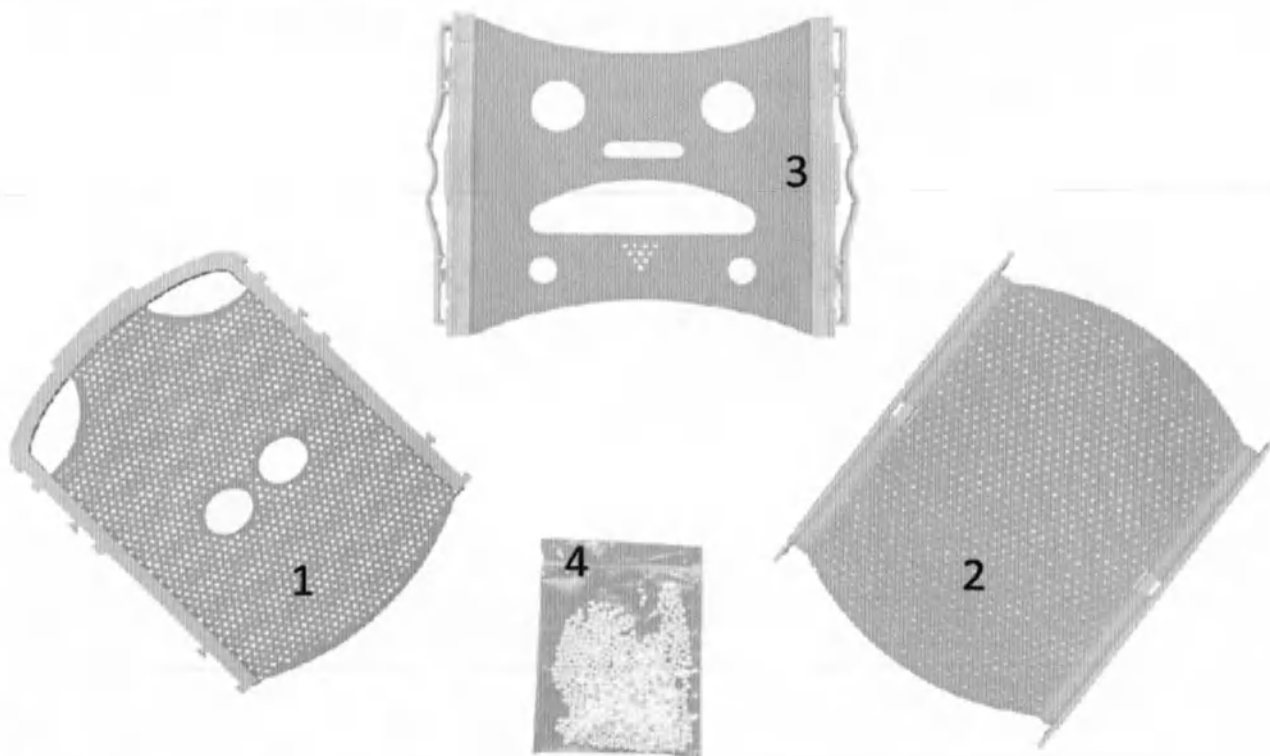

Состав:

- Верхняя маска термопластическая Klarity RG408A-1 (на рисунке №1)
- Нижняя маска термопластическая Klarity RG408A-1 (на рисунке №2)
- Средняя маска термопластическая Klarity RG408A-1 (на рисунке №3)
- Гранулы сыпучие, 1 упаковка (на рисунке №4)

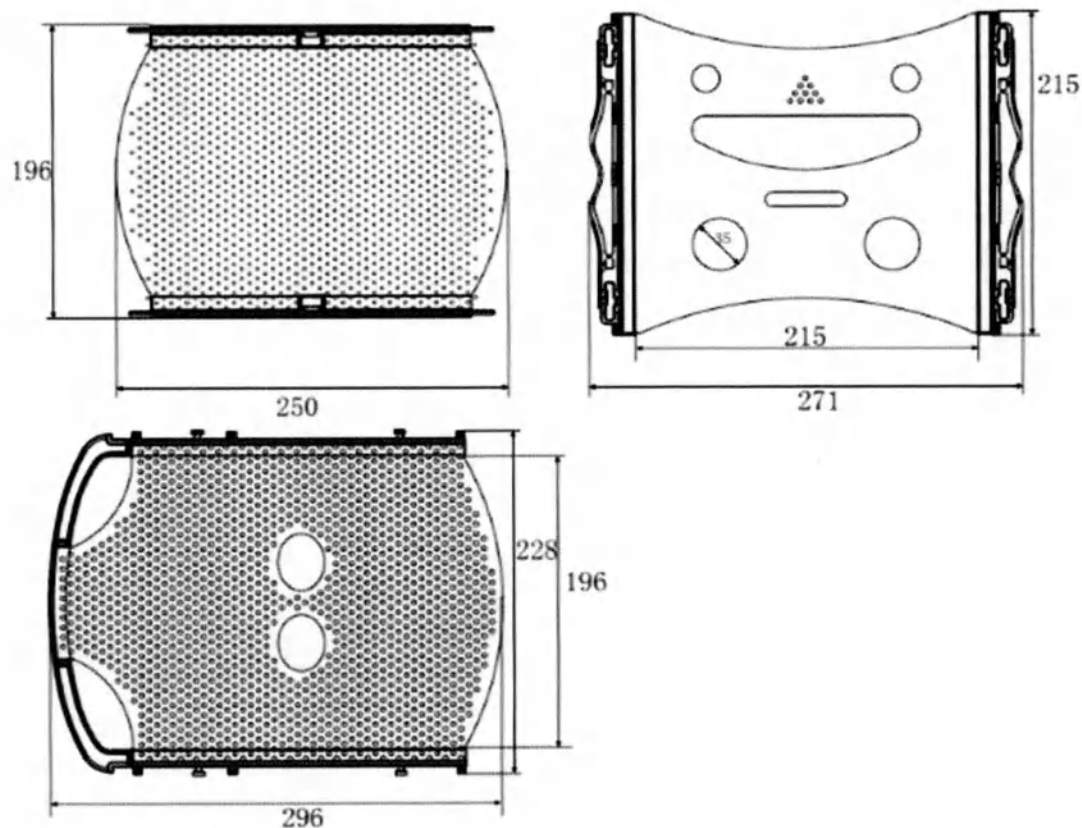

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG408A-1	2,4	470	5

Гранулы сыпучие:


Диаметр, мм: $2,5 \pm 0,5$ мм.

Давление на ткани: не более 5Н.

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Encompass


Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Encompass, модель RBSRS-3210Q

Состав маски термопластической для фиксации головы с креплением для стереотаксической системы Encompass, выполненной из термопластика Klarity Blue, представлен на рисунке ниже.

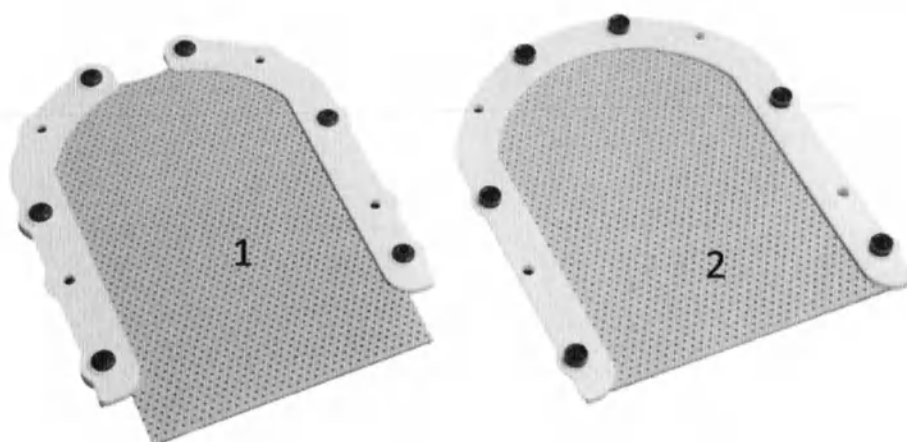

Состав:

- Верхняя маска термопластическая (на рисунке №1)
- Нижняя маска термопластическая (на рисунке №2)
- Прокладка для шиммирования, не более 50 шт.
- Адаптер для фиксации маски на устройства иммобилизации с креплением типа S-Type (при необходимости).

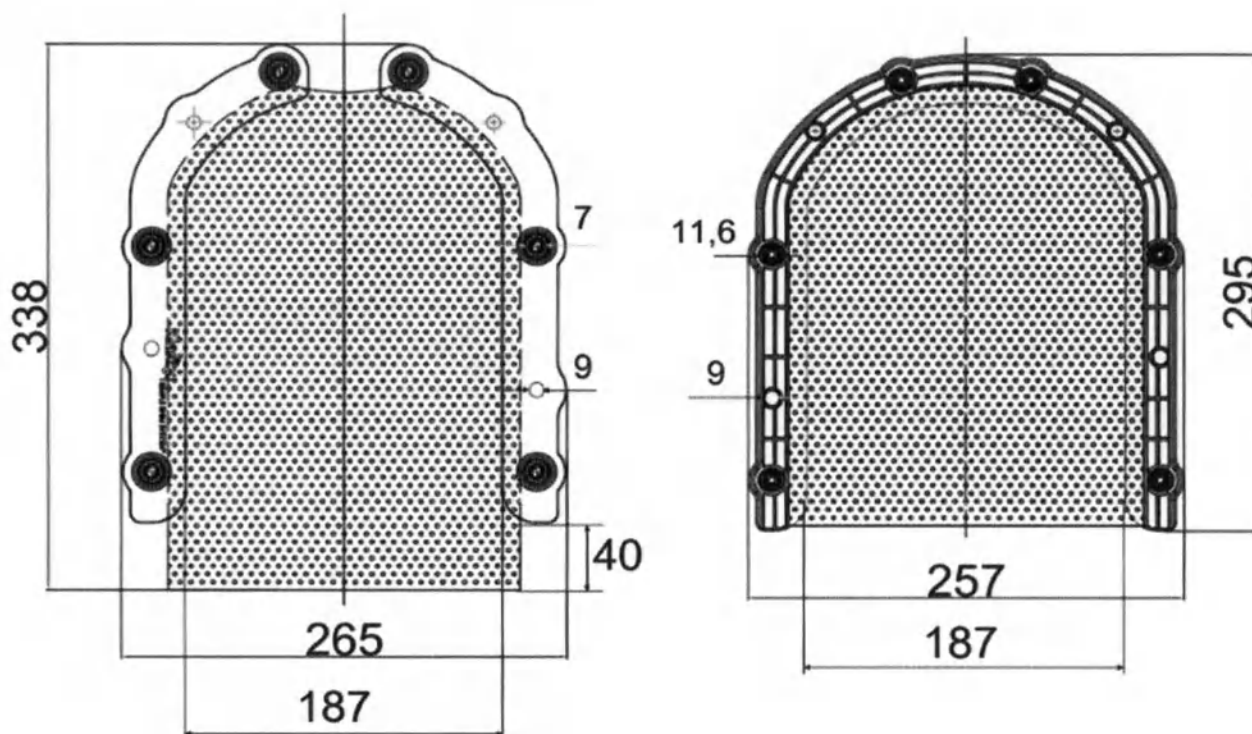


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RBSRS-3210Q	3,3	590	1


Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Encompass, модель RBSRS-3210QF

Состав маски термопластической для фиксации головы с креплением для стереотаксической системы Encompass с отверстием для лица, выполненной из термопластика Klarity Blue, представлен на рисунке ниже.

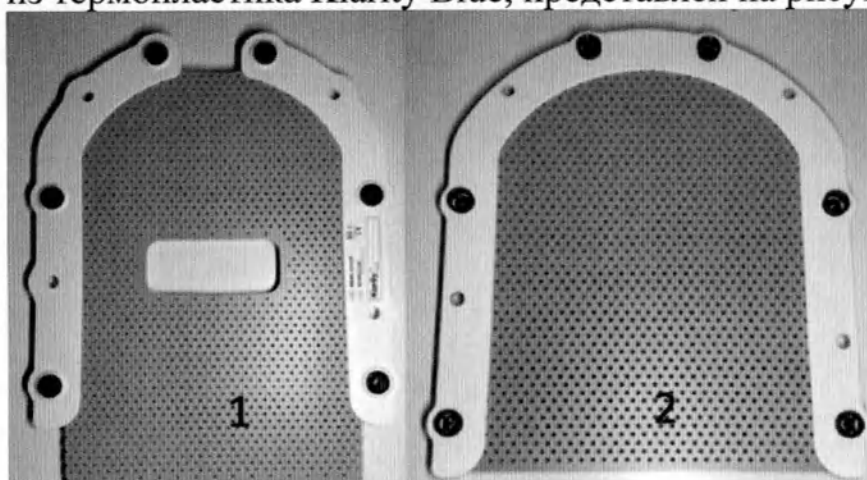

Состав:


- Верхняя маска термопластическая (на рисунке №1)
- Нижняя маска термопластическая (на рисунке №2)
- Прокладка для шиммирования, не более 50 шт.
- Адаптер для фиксации маски на устройства иммобилизации с креплением типа S-Type (при необходимости).

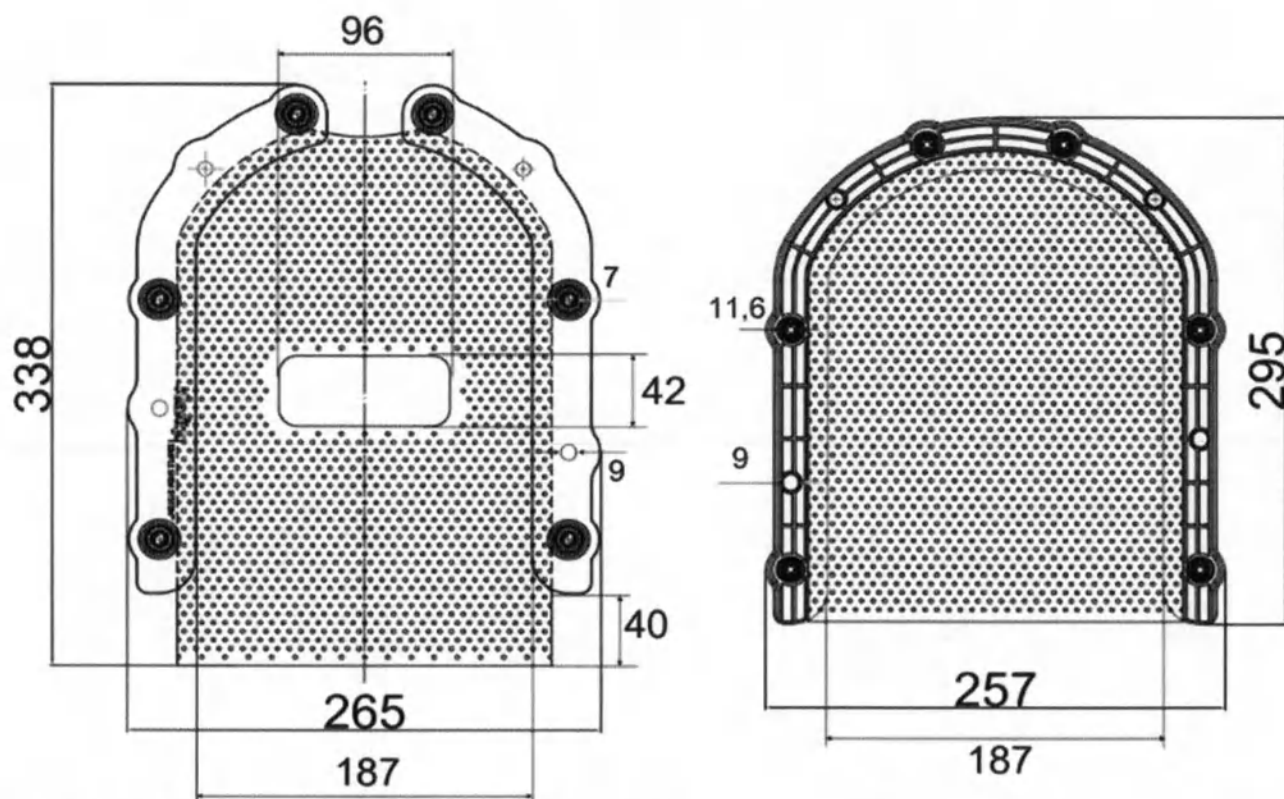

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RBSRS-3210QF	3,3	581	1

**Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Encompass:
Прокладка для шуммирования**

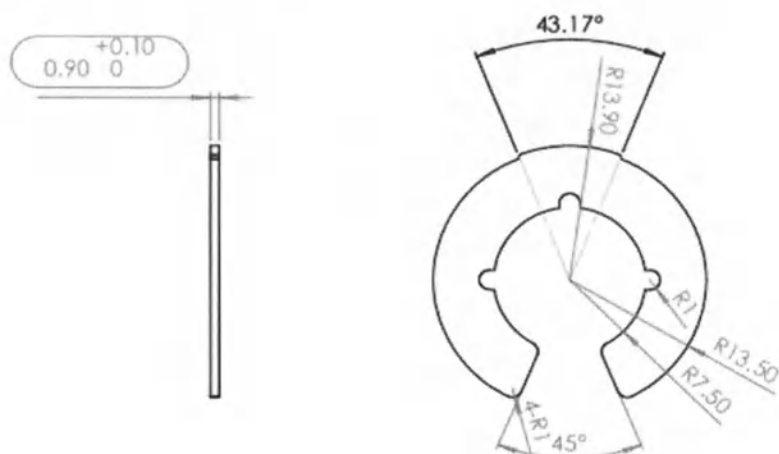

Масса 1 г

Klarity

***Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Encompass:
Адаптер для фиксации маски на устройства иммобилизации с
креплением типа S-Type***


Габаритные размеры 318х246х100 мм

Масса 458 г

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity SRS

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity SRS, модель RBSRS-01

Состав маски термопластической для фиксации головы с креплением для стереотаксической системы Klarity SRS, выполненной из термопластика Klarity Blue, представлен на рисунке ниже.

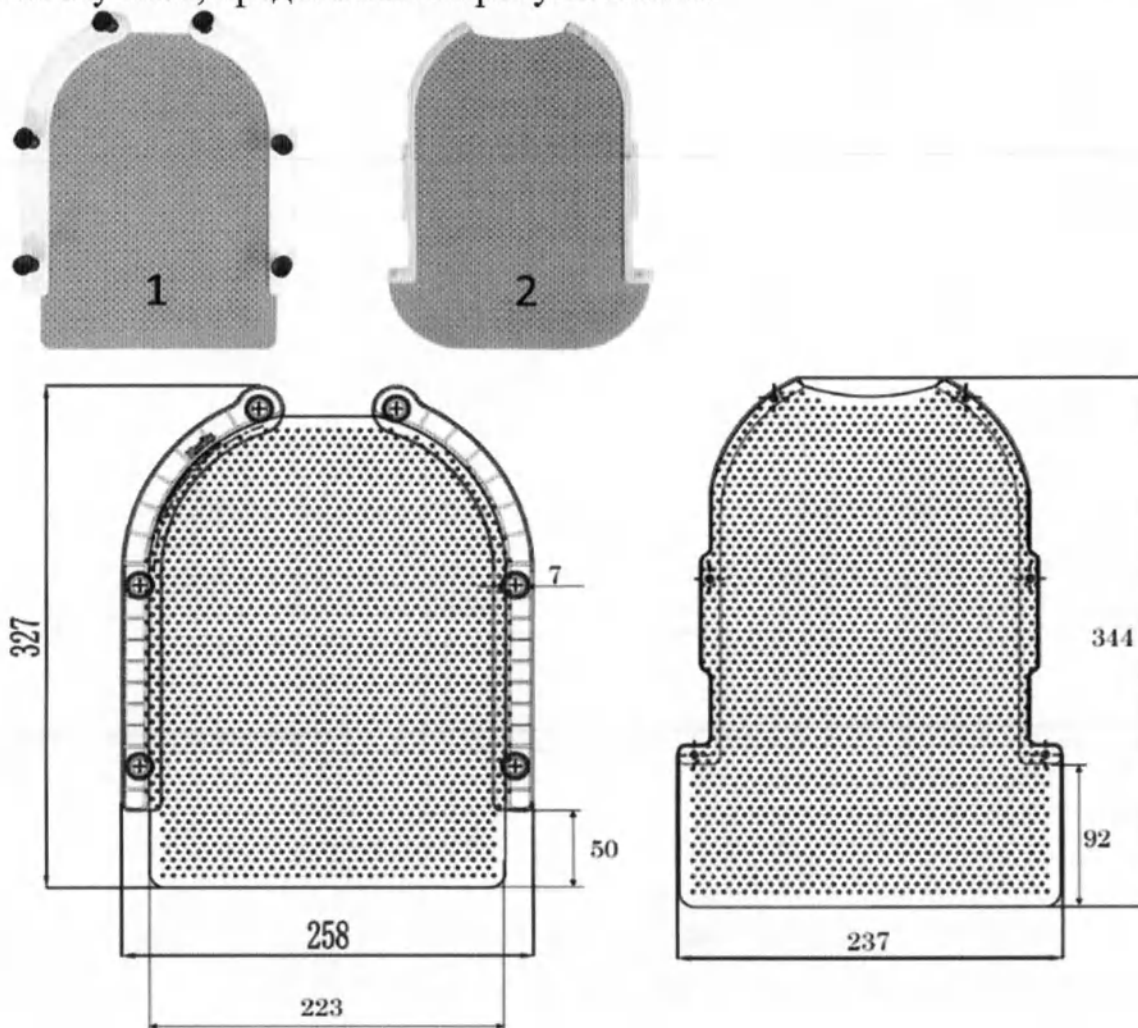

Состав:


- Верхняя маска термопластическая (на рисунке №1)
- Нижняя маска термопластическая (на рисунке №2)

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RBSRS-01	3,3	550	1


Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой Klarity SRS, модель RBSRS-F01

Состав маски термопластической для фиксации головы с креплением для стереотаксической системы Klarity SRS с отверстием для лица, выполненной из термопластика Klarity Blue, представлен на рисунке ниже.

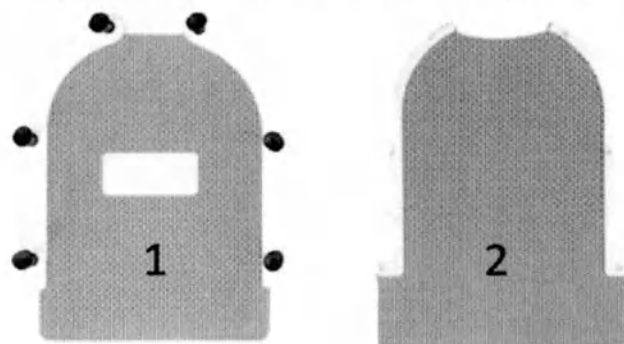

Состав:

- Верхняя маска термопластическая.
- Нижняя маска термопластическая.

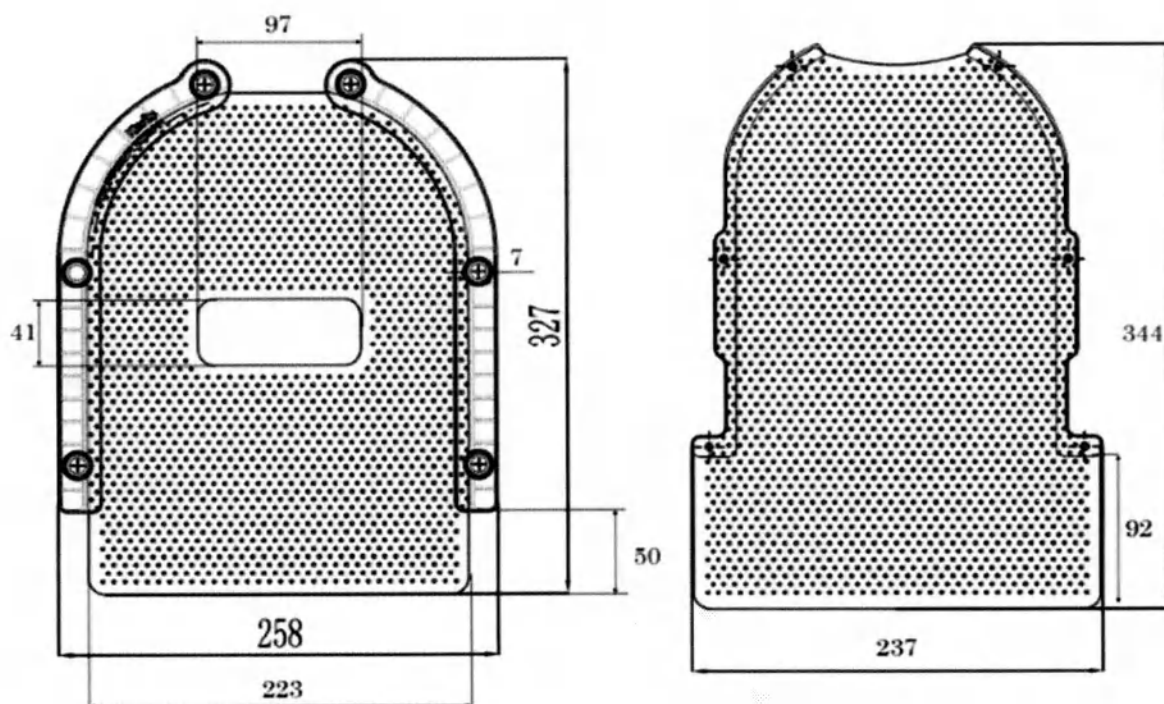


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RBSRS-F01	3,3	545	1

Маска термопластическая, совместимая с системой Gamma Knife

Маска термопластическая, совместимая с системой Gamma Knife, модель RB-ESH3-3210CN

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с креплением для системы Gamma Knife, закругленная, с отверстием для носа, выполненной из термопластика Klarity Blue, представлен на рисунке ниже.


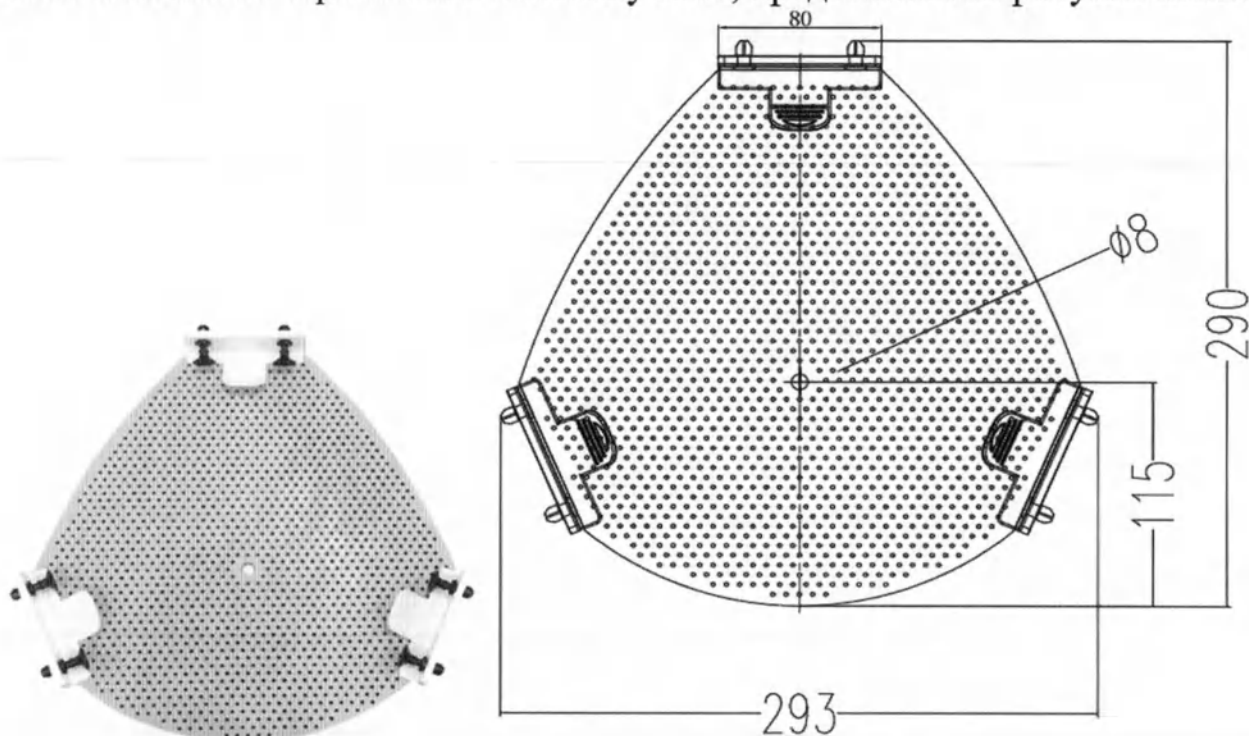


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB-ESH3-3210CN	3,3	268	10

Маска термопластическая, совместимая с системой Gamma Knife, модель RLG-ESH3-2412CN.

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с креплением для системы Gamma Knife, закругленная, с отверстием для носа, выполненной из термопластика Klarity Lite Green, представлен на рисунке ниже.

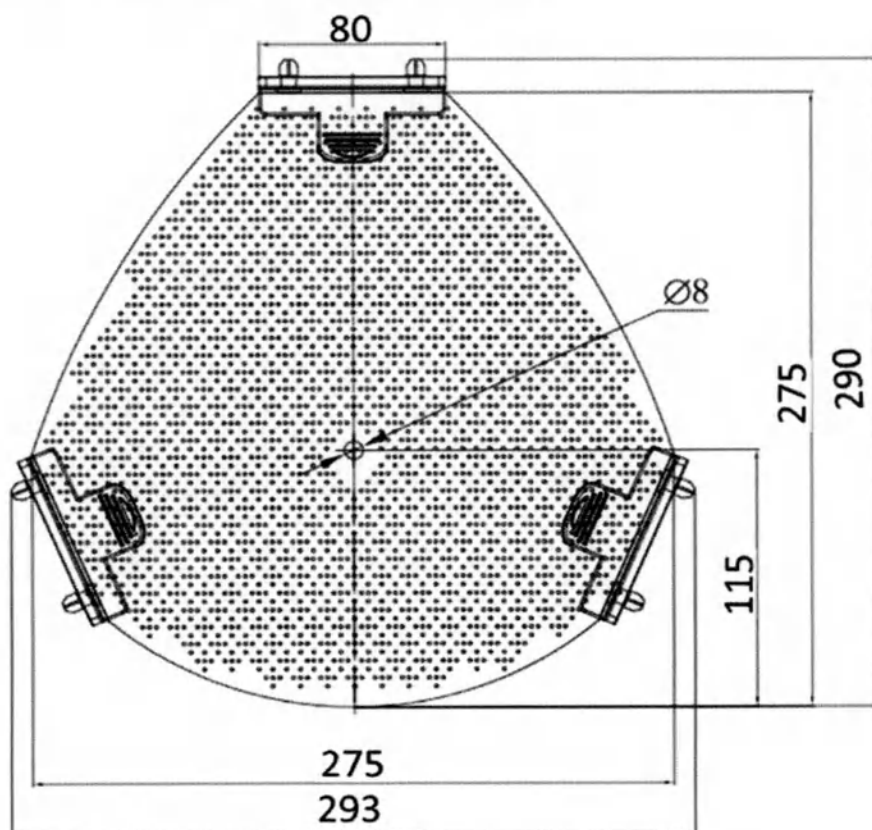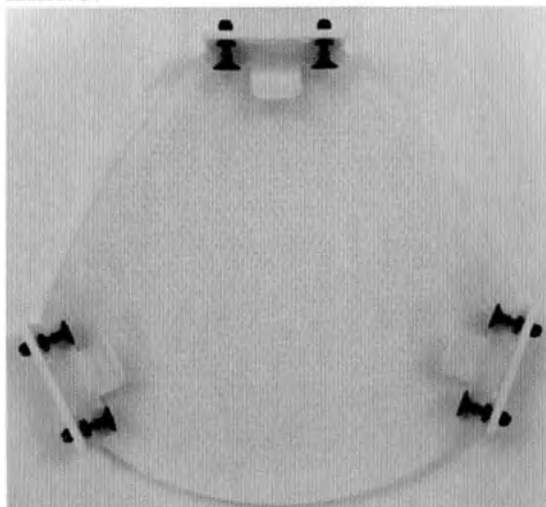


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RLG-ESH3-2412CN	2,4	190	10

Маска термопластическая, совместимая с системой Fraxion

Маска термопластическая, совместимая с системой Fraxion, модель RLG-ESH1-2412C

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, выполненной из термопластика Klarity Lite Green, представлен на рисунке ниже.


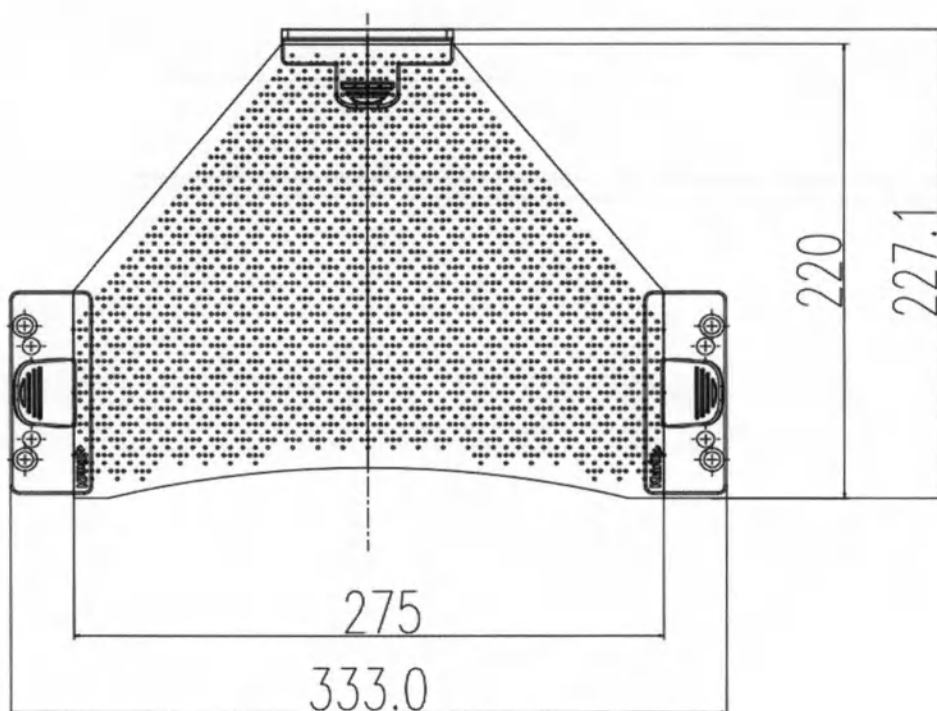


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RLG-ESH1-2412C	2,4	252	10

Маска термопластическая, совместимая с системой Fraxion, модель RLG-ESH1-3212CF

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с отверстием для лица, выполненной из термопластика Klarity Lite Green, представлен на рисунке ниже.

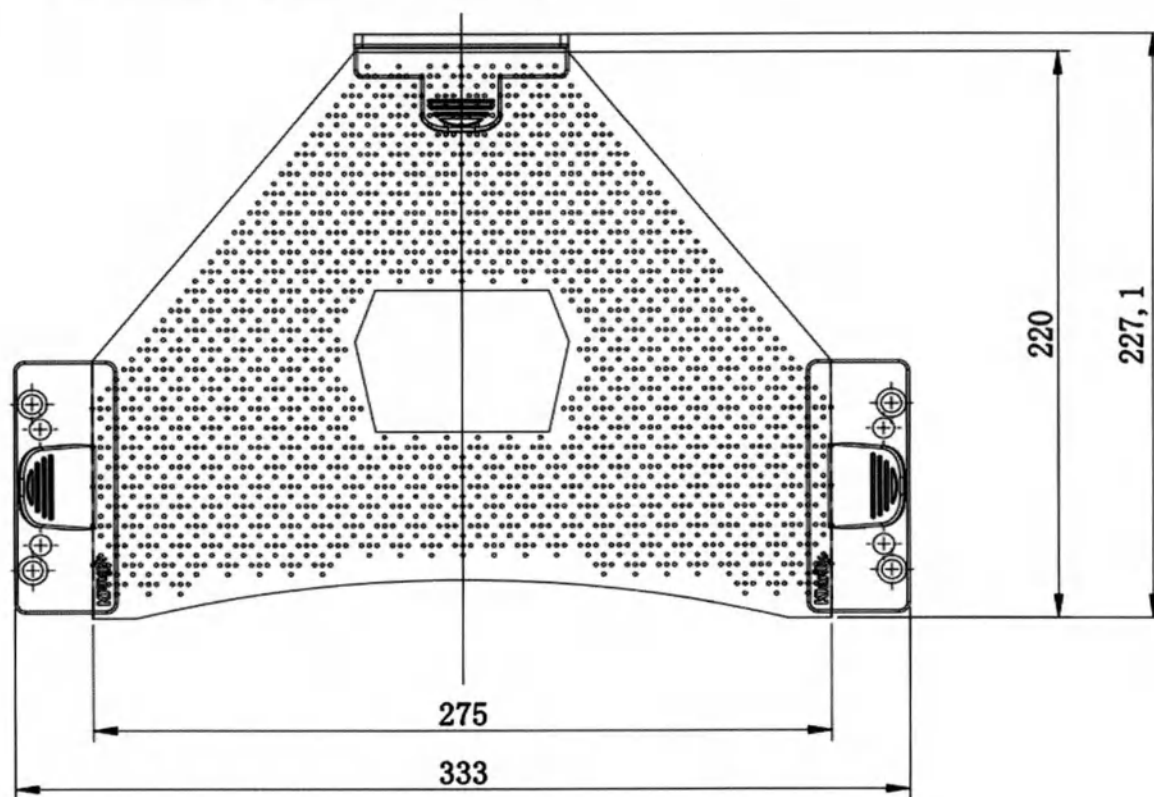
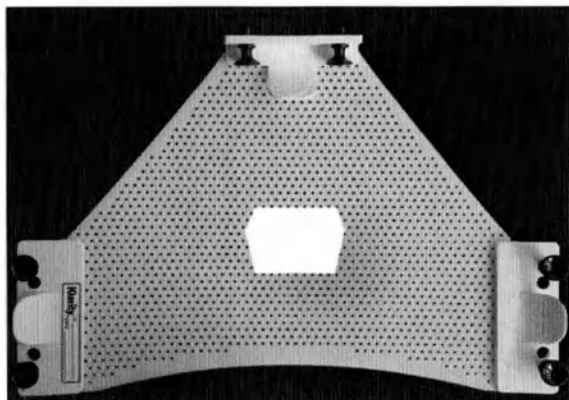


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RLG-ESH1-3212CF	3,2	262	10

Маска термопластическая, совместимая с системой Fraxion, модель RB-ESH1-3210C

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, выполненной из термопластика Klarity Blue, представлен на рисунке ниже.

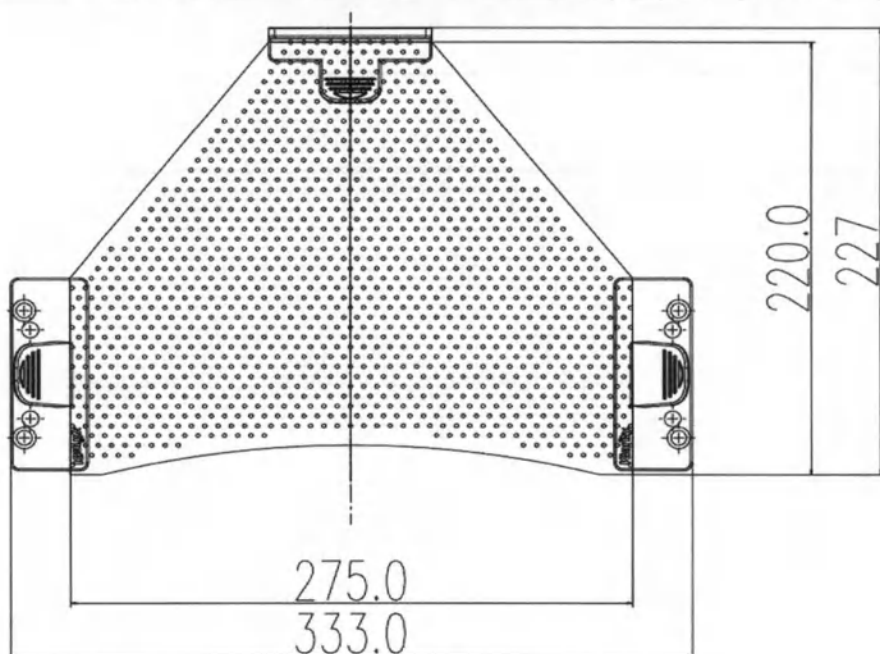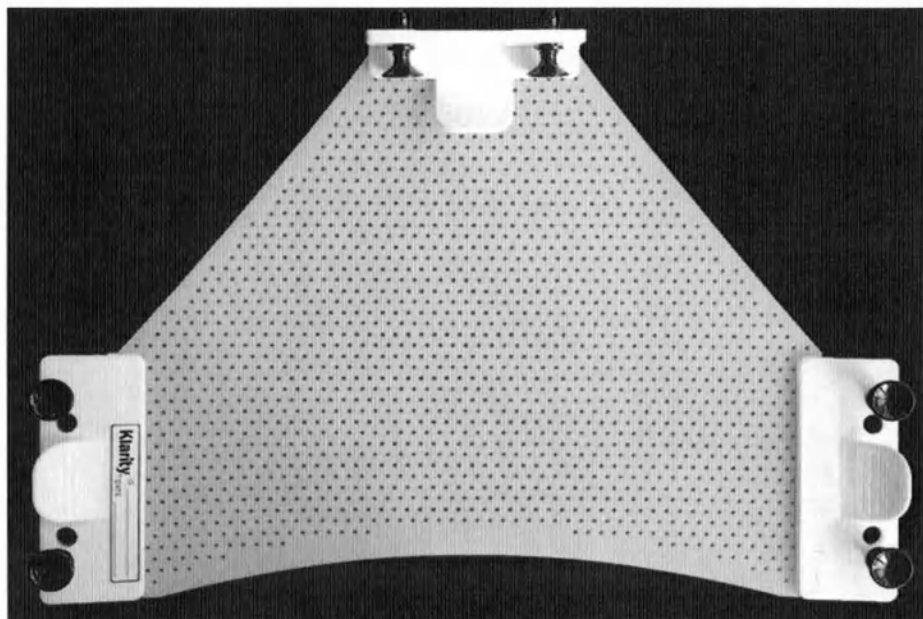


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB-ESH1-3210C	3,3	268	10

Маска термопластическая, совместимая с системой Fraxion, модель RB-ESH2-3210C

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, закруглённой, выполненной из термопластика Klarity Blue, представлен на рисунке ниже.


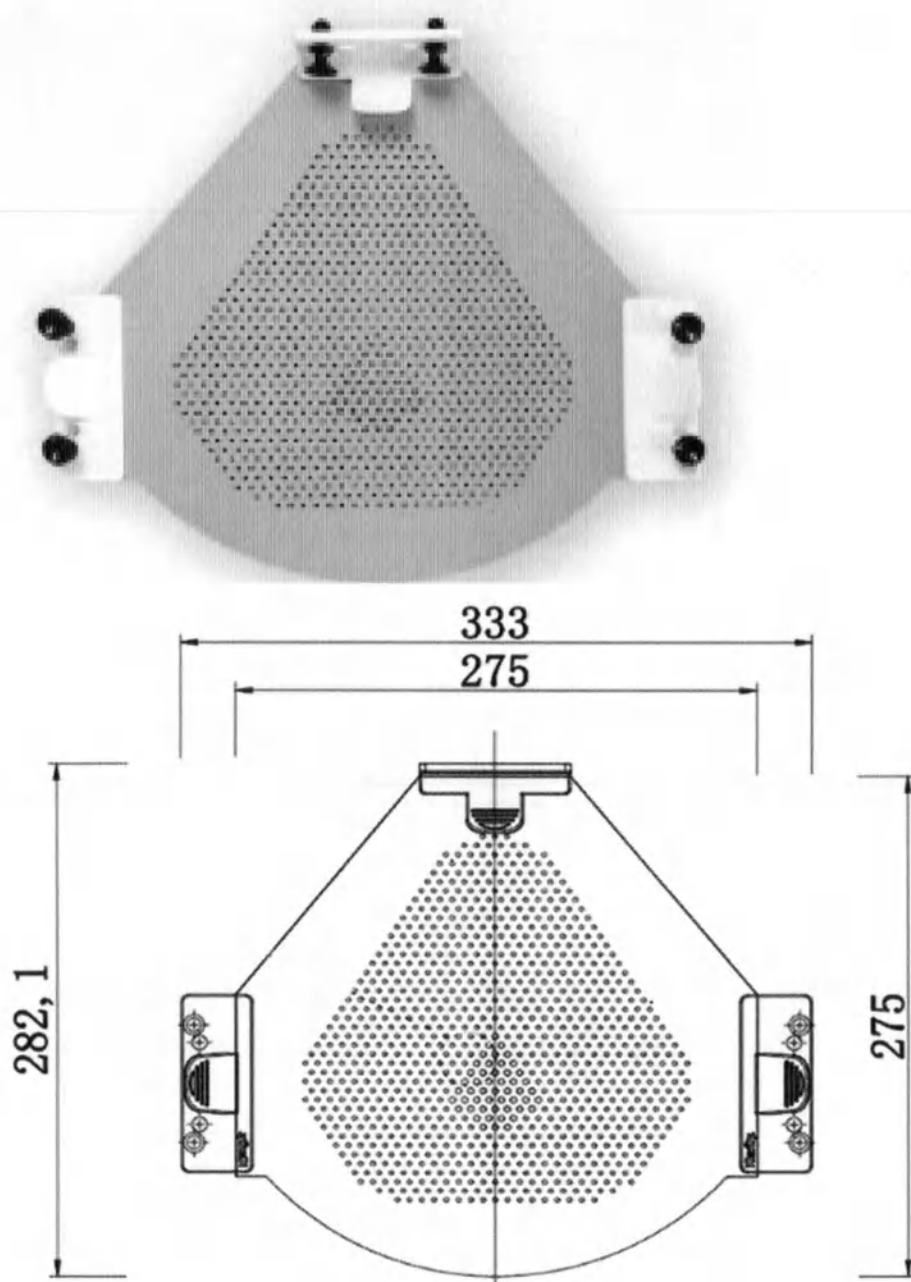


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB-ESH2-3210C	3,3	273	10

Маска термопластическая, совместимая с системой Fraxion, модель RB-ESH2-3210CF

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с закруглённой вставкой и рисунком перфорации для IMRT Open Face (отверстие для лица), выполненной из термопластика Klarity Blue, представлен на рисунке ниже.

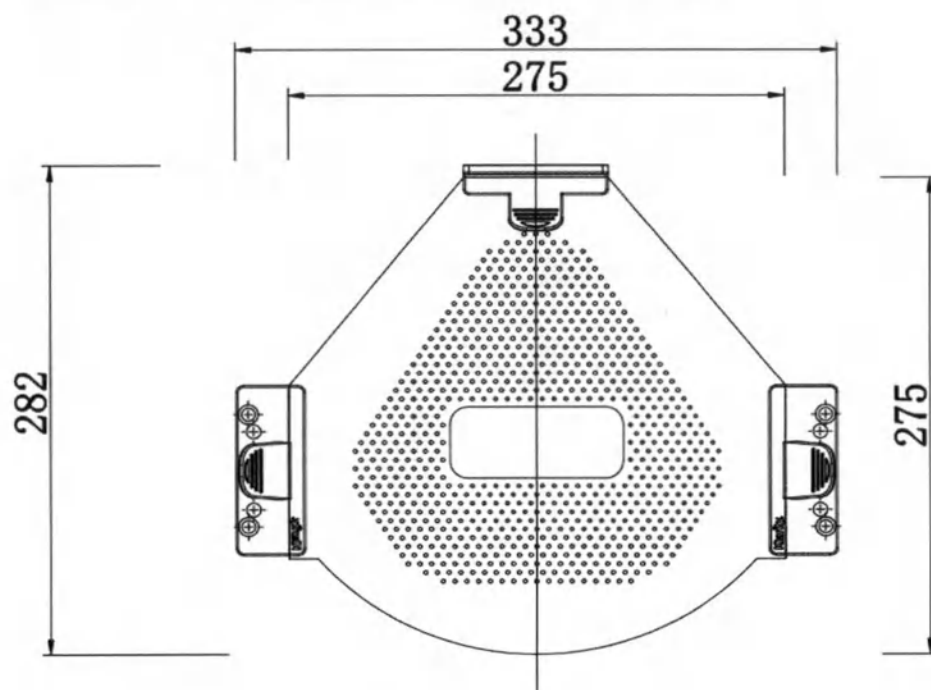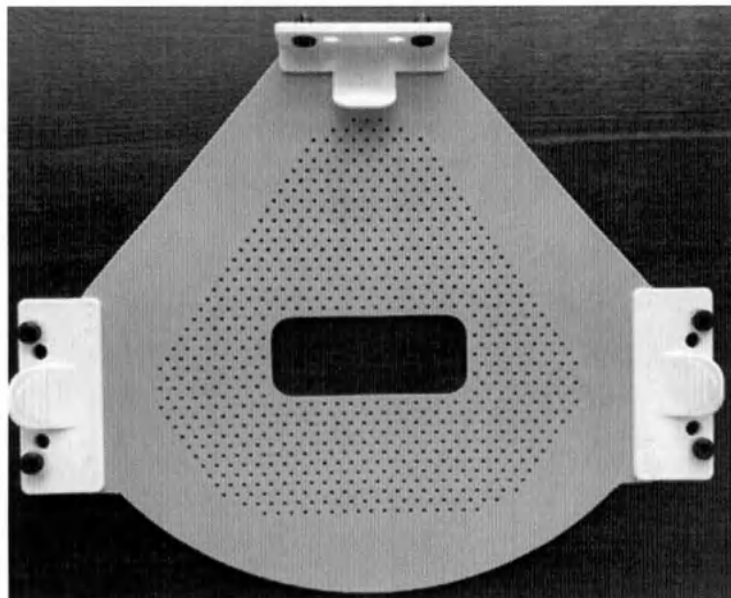



Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB-ESH2-3210CF	3,3	268	10

Маска термопластическая, совместимая с системой HeadSTEP

Маска термопластическая, совместимая с системой HeadSTEP, модель RLG-ELH-2412CN

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с закругленной вставкой с отверстием для носа, выполненной из термопластика Klarity Lite Green, представлен на рисунке ниже.

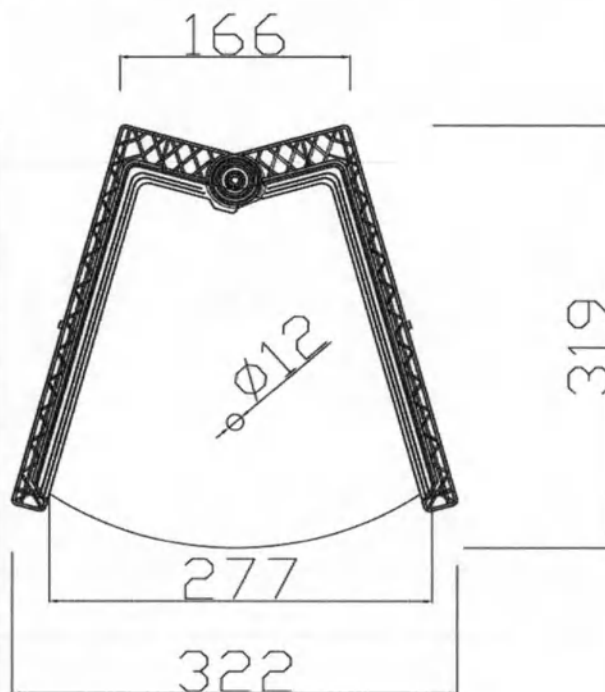
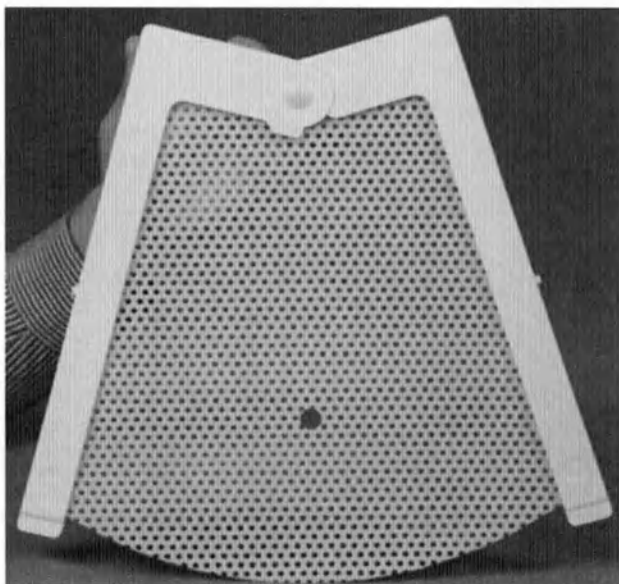


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RLG-ELH-2412CN	2,4	206	10

Маска термопластическая, совместимая с системой HeadSTEP, модель RLG-ELN-2412C

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с удлиненной вставкой, выполненной из термопластика Klarity Lite Green, представлен на рисунке ниже.

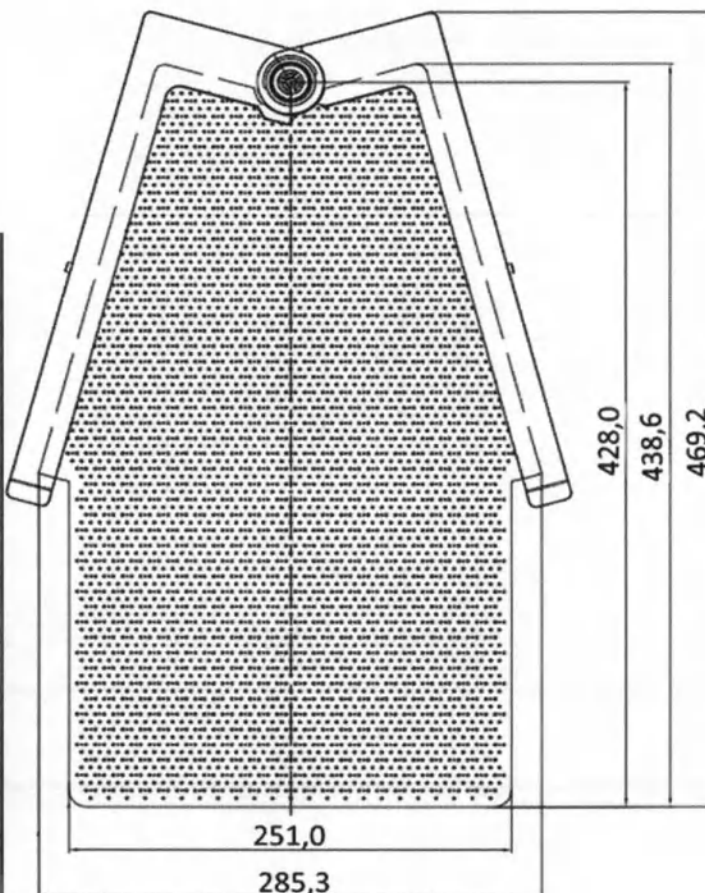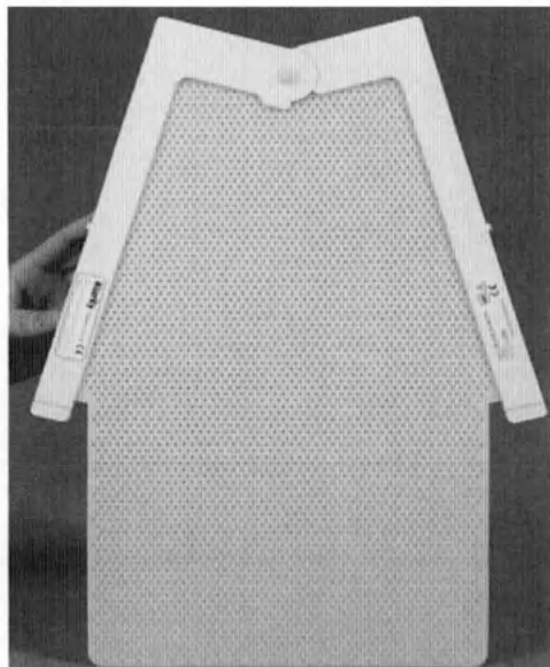


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RLG-ELN-2412C	2,4	382	10

Маска термопластическая, совместимая с системой HeadSTEP, модель RG-ELH-2022N

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с закругленной вставкой с отверстием для носа, выполненной из термопластика Klarity Green, представлен на рисунке ниже.

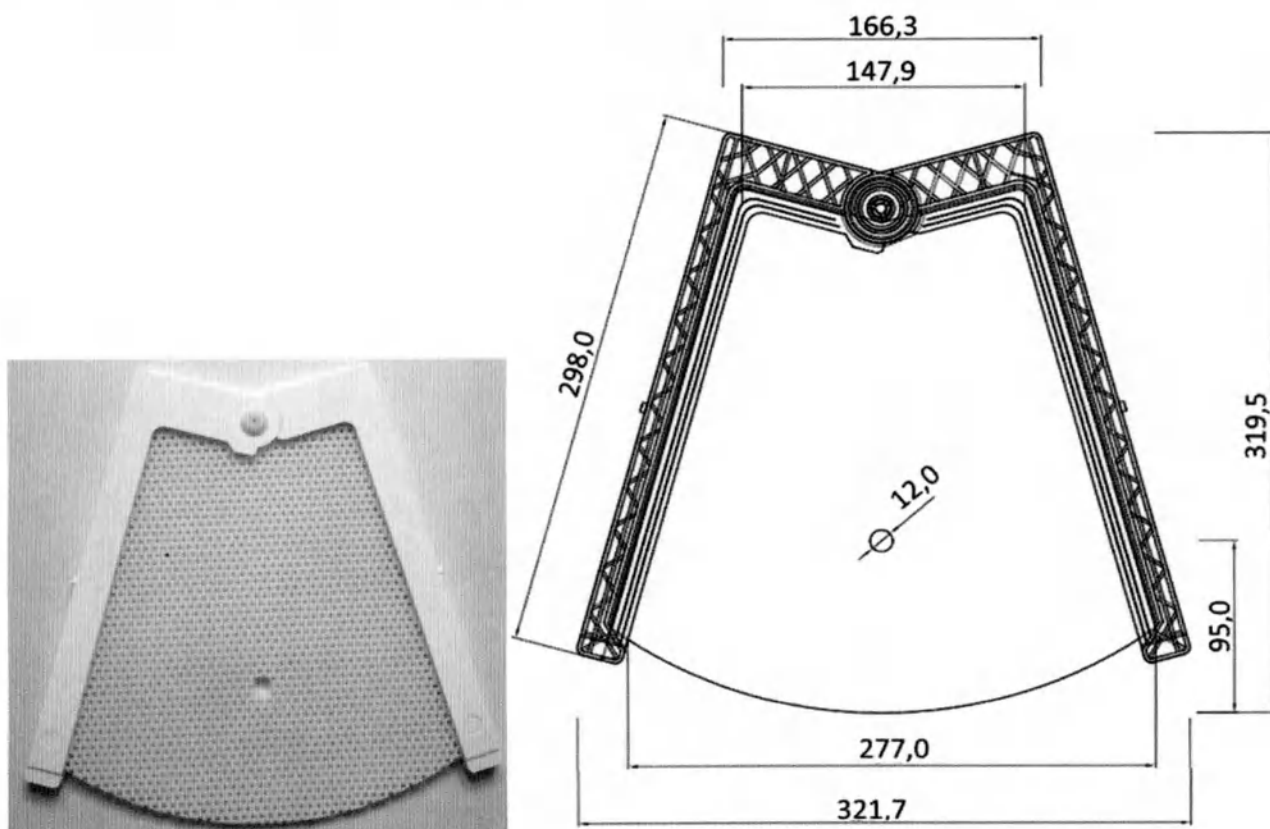


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG-ELH-2022N	2,0	209	10

Маска термопластическая, совместимая с системой HeadSTEP, модель RG-ELS-2022N

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч с закругленной вставкой с отверстием для носа, выполненной из термопластика Klarity Green, представлен на рисунке ниже.

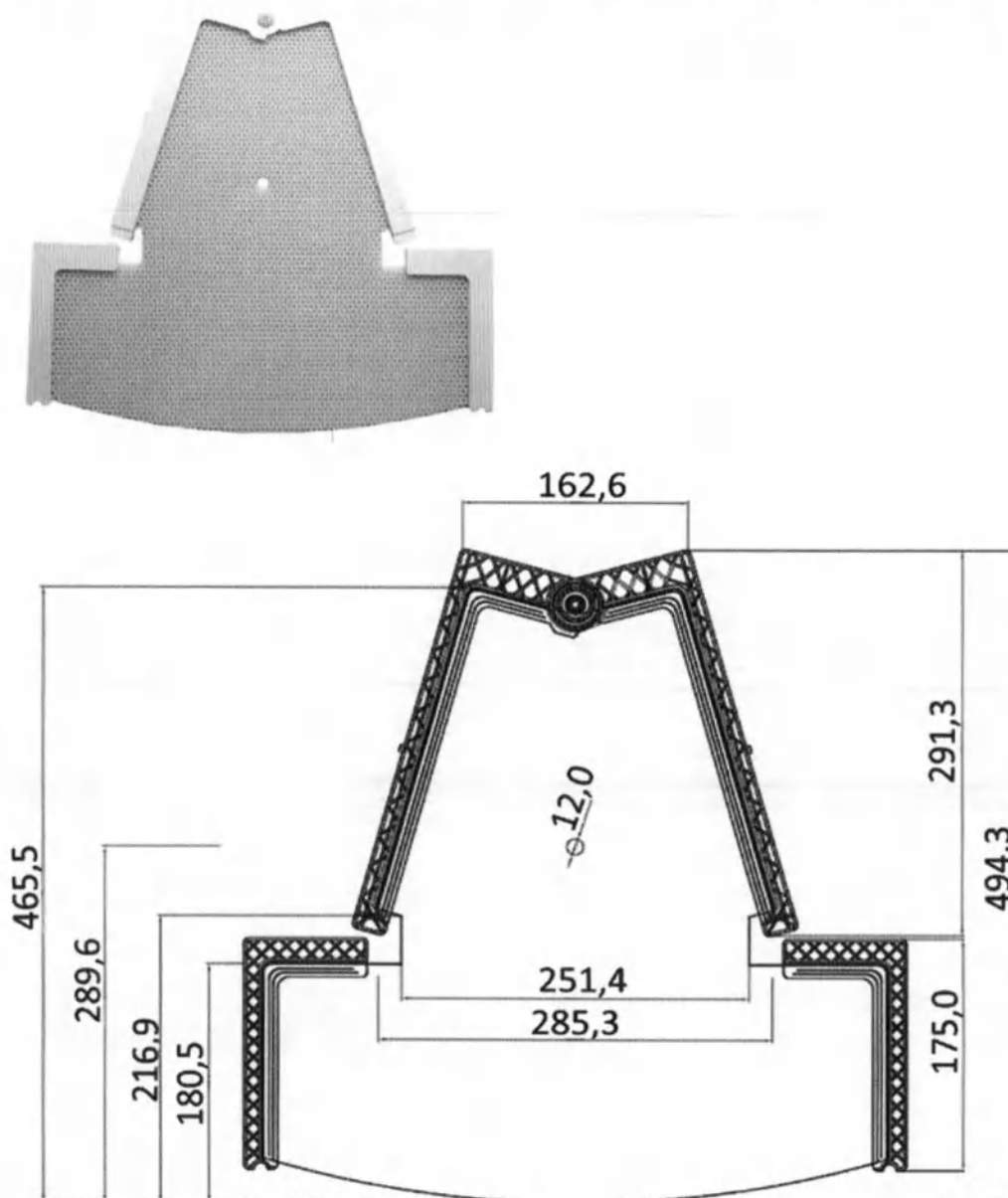


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG-ELS-2022N	2,0	451	10

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BoS


Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BoS, модели: RB-BHS-3210, RB-BHM-3210, RB-BHL-3210


Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, выполненной из термопластика Klarity Blue, представлен на рисунке ниже.

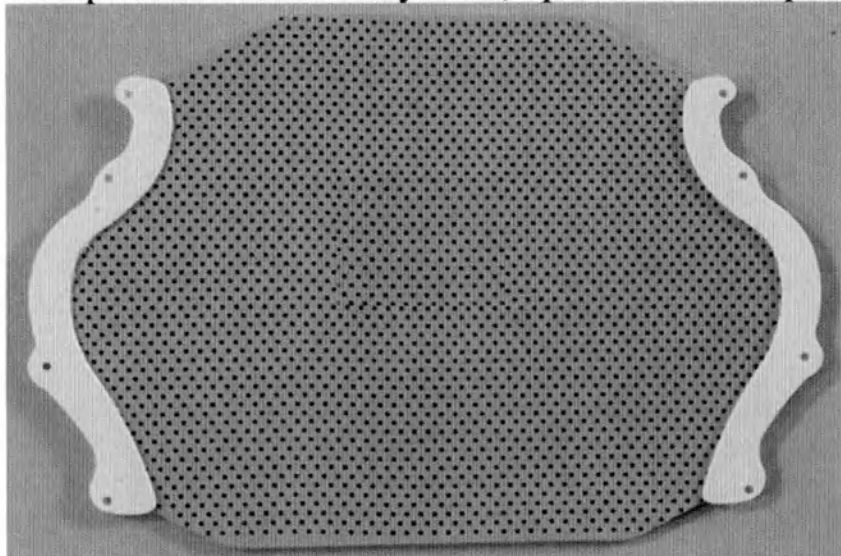


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB-BHS-3210	3,3	262	10
RB-BHM-3210	3,3	273	10
RB-BHL-3210	3,3	286	10

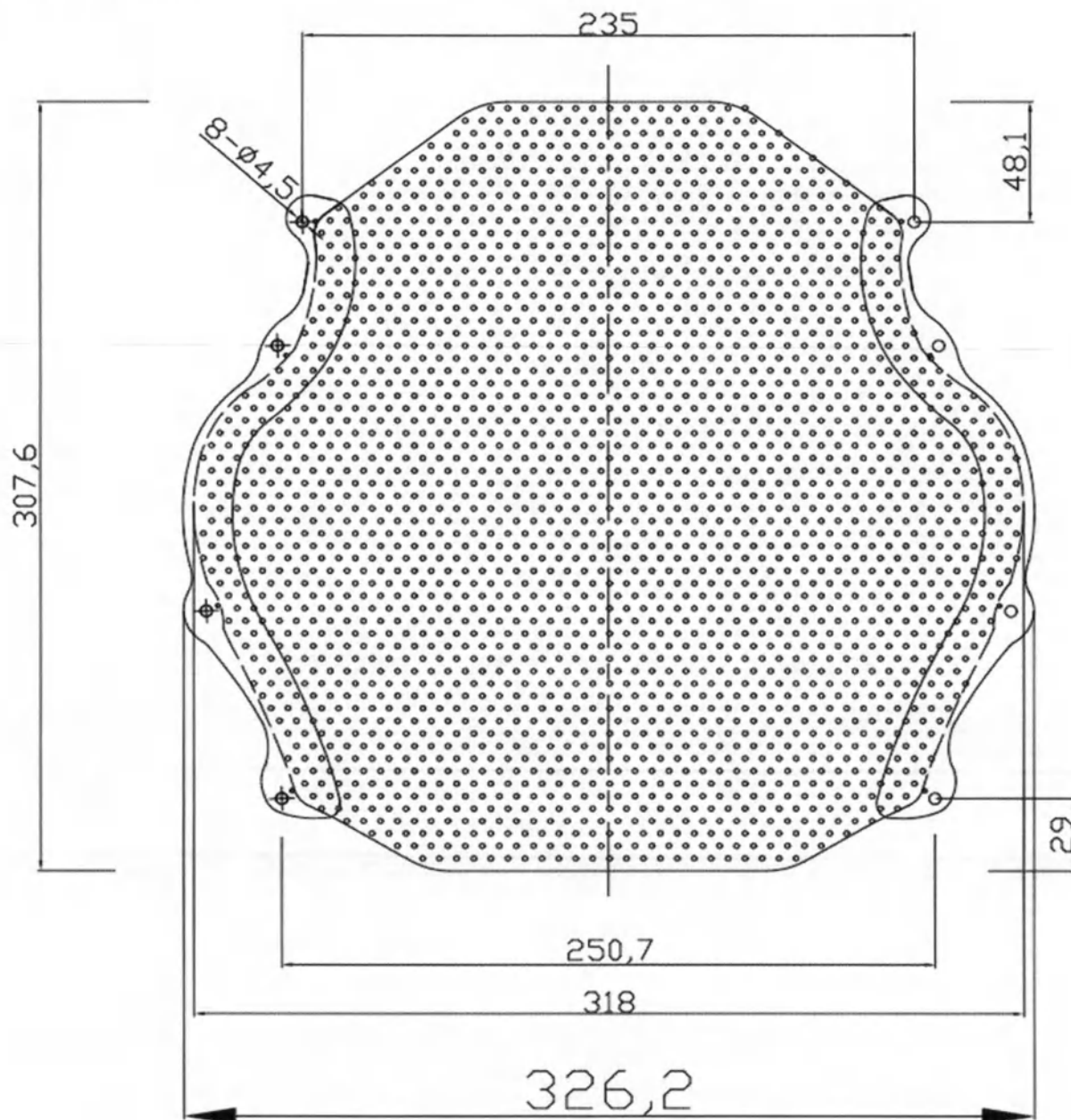


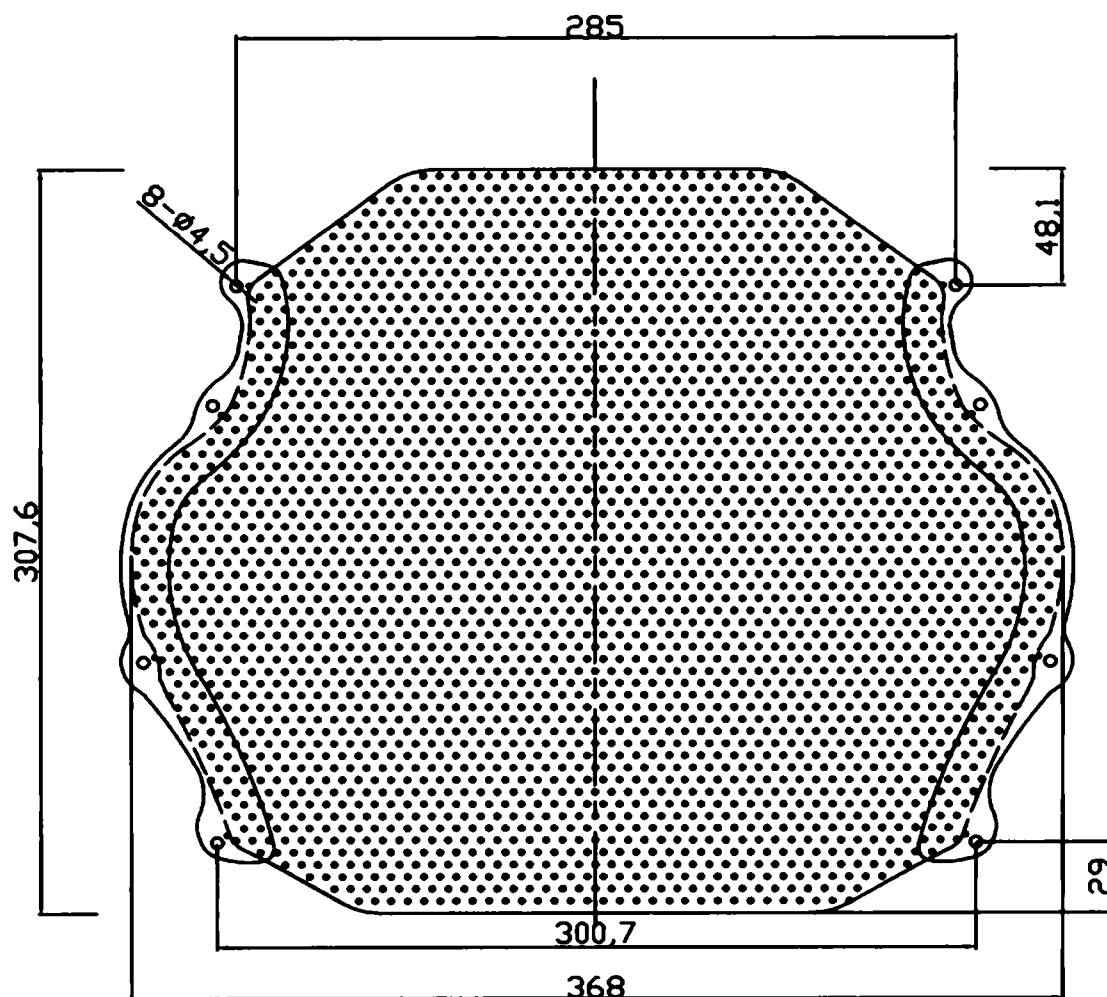


RB-BHL-3210

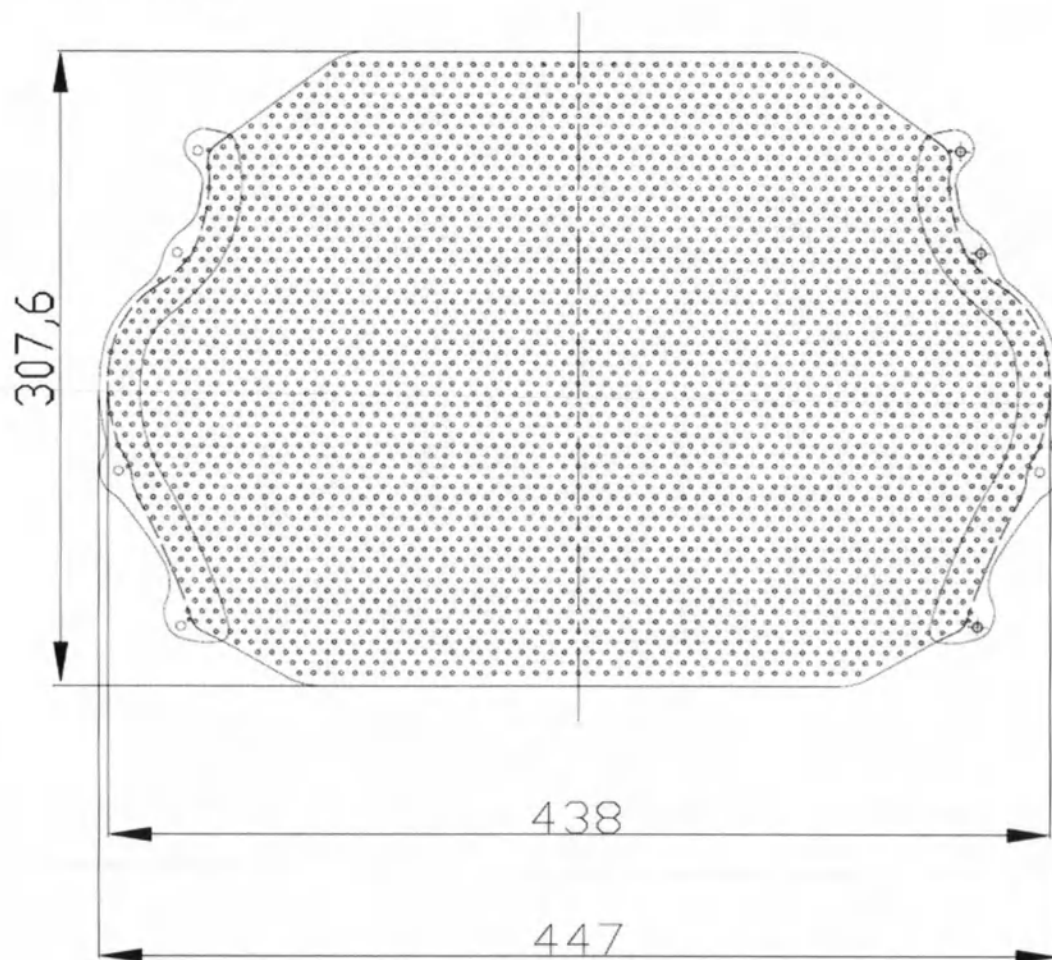

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BoS, модель RB-BHMF-3210

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы с отверстием для лица, выполненной из термопластика Klarity Blue, представлен на рисунке ниже.

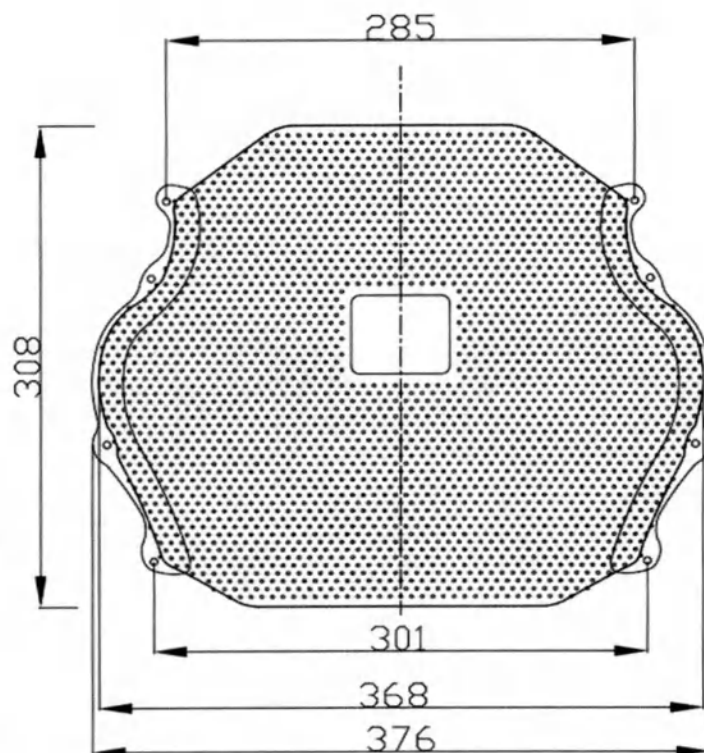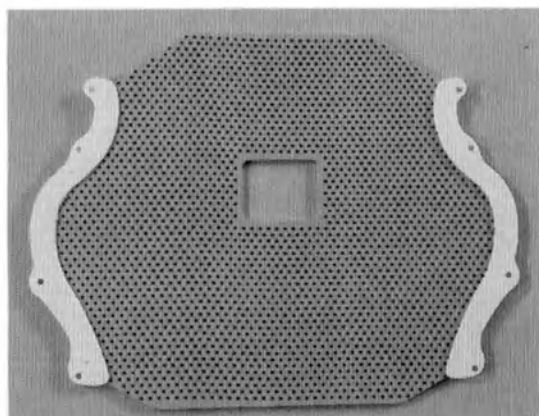


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB-BHMF-3210	3,3	269	10

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BoS, модели: RB-BSM-3210, RB-BSL-3210


Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч, выполненной из термопластика Klarity Blue, представлен на рисунке ниже.

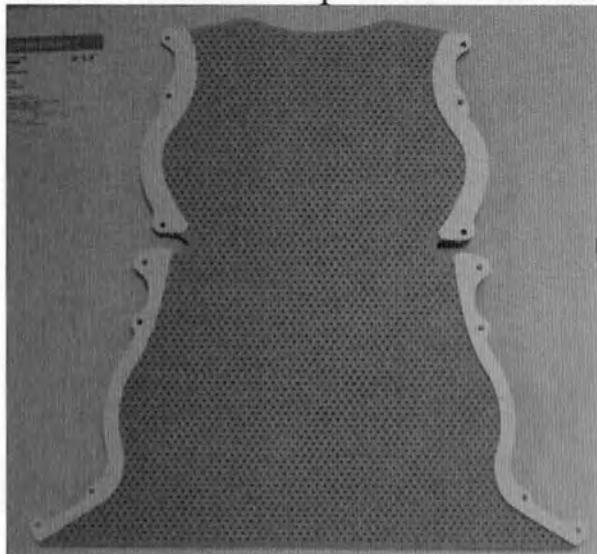


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB-BSM-3210	3,3	601	10
RB-BSL-3210	3,3	629	10

RB-BSM-3210


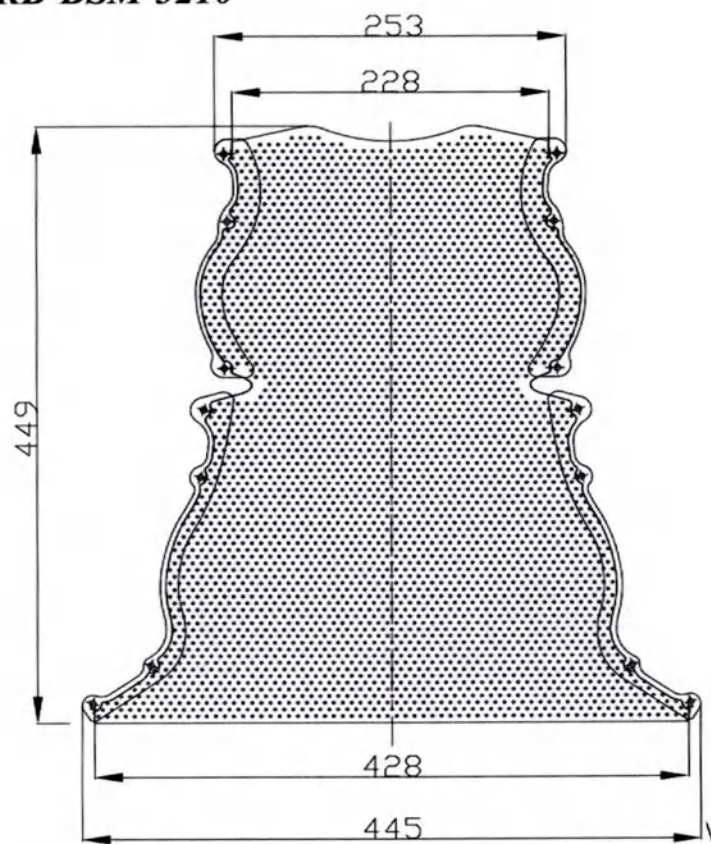


RB-BSL-3210

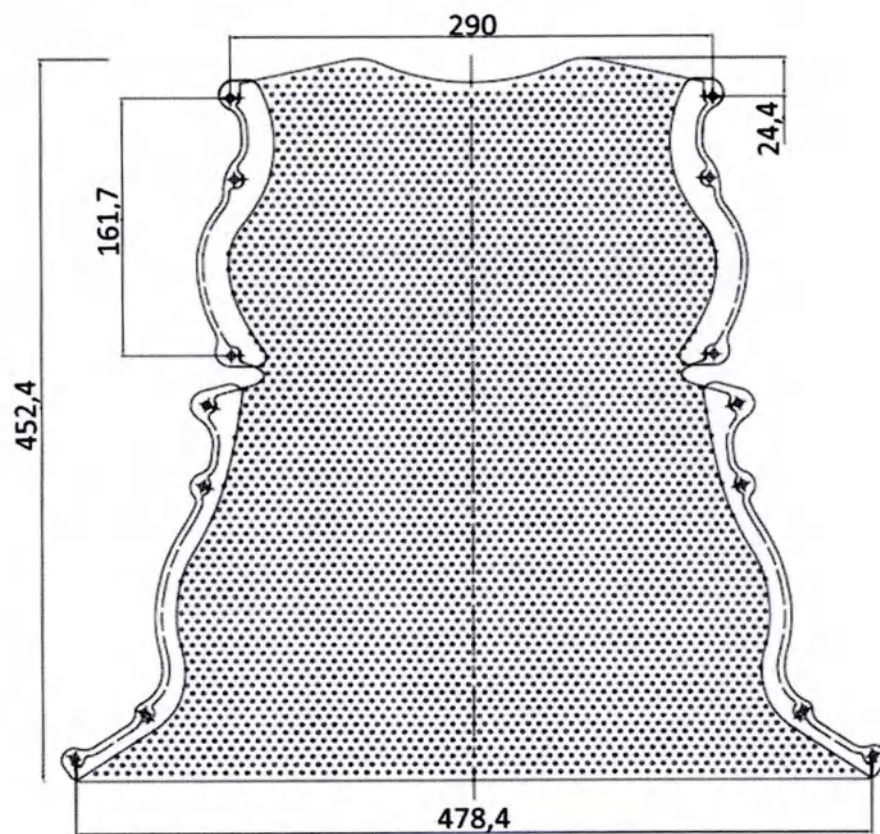

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BoS, модель RB-BSLF-3210

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч с отверстием для лица, выполненной из термопластика Klarity Blue, представлен на рисунке ниже.

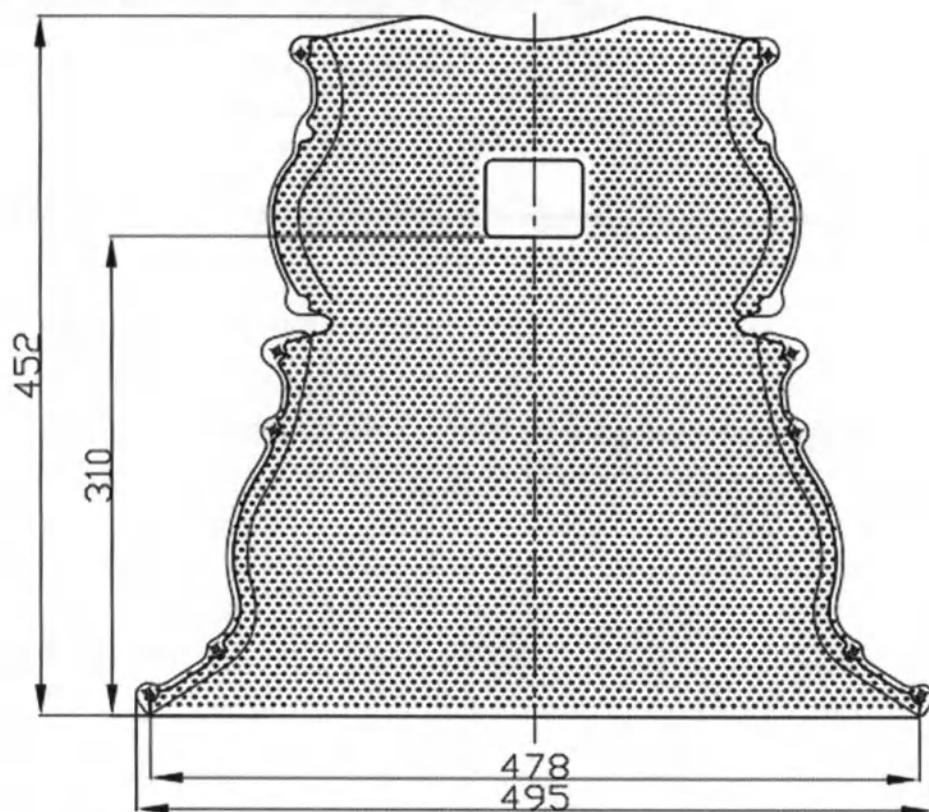
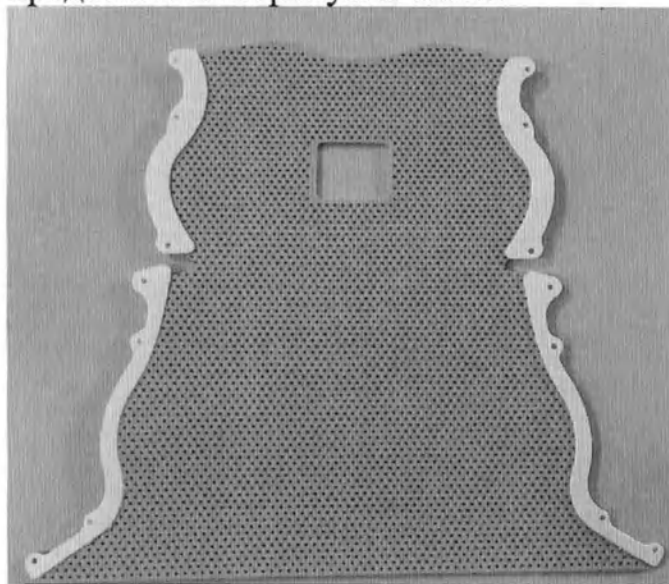


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RB-BSLF-3210	3,3	625	10

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BoS, модели: RG-BHM-2436F, RG-BHM-3242F

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, выполненной из термопластика Klarity Green, представлен на рисунке ниже.

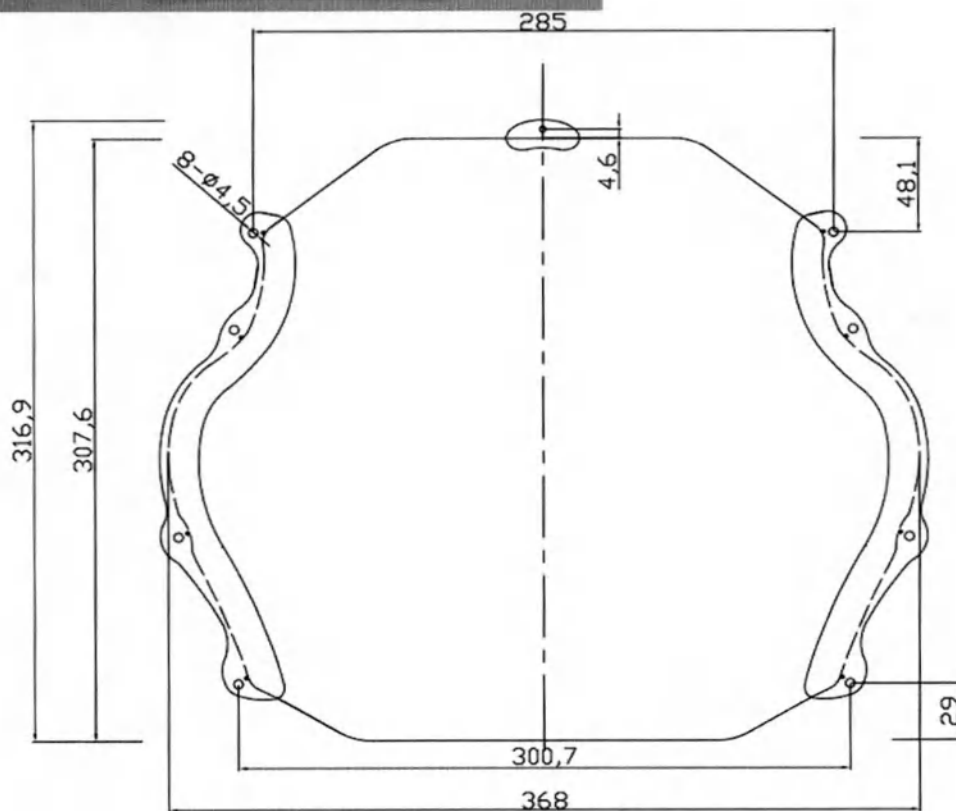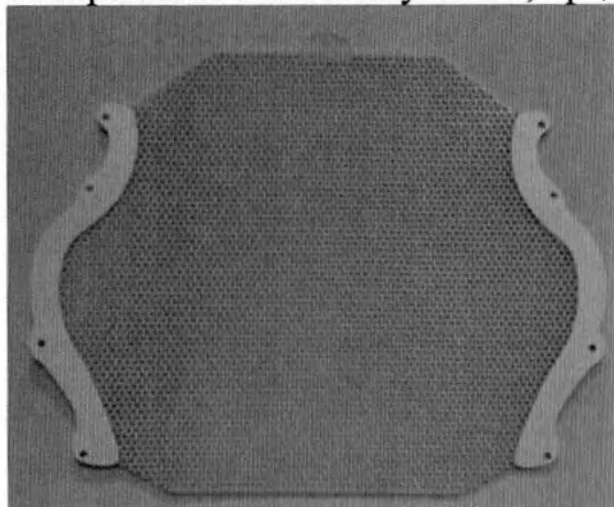


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG-BHM-2436F	2,4	254	10
RG-BHM-3242F	3,2	262	10

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BoS, модели: RG-BSM-2436F, RG-BSM-3242F

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч, выполненной из термопластика Klarity Green, представлен на рисунке ниже.


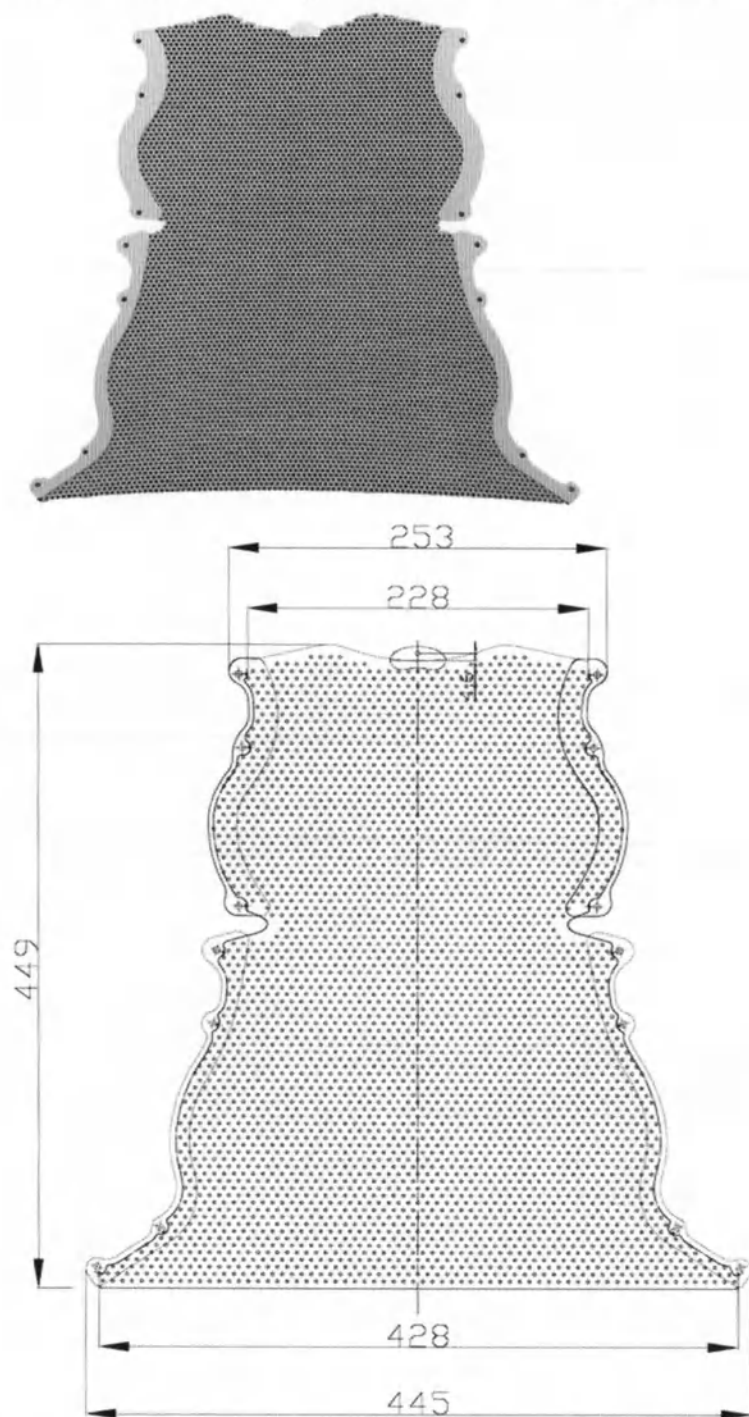


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG-BSM-2436F	2,4	571	10
RG-BSM-3242F	3,2	583	10

Маска термопластическая Klarity, совместимая с системой BoS, модель RG-BHS-A2436

Внешний вид маски педиатрической термопластической для фиксации головы, выполненной из термопластика Klarity Green, представлен на рисунке ниже.

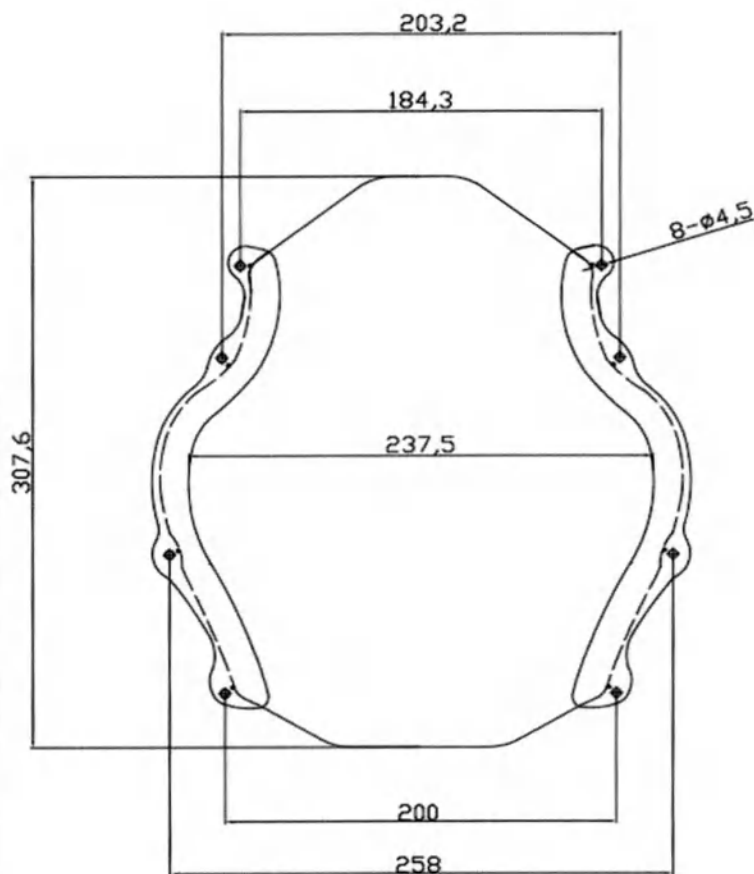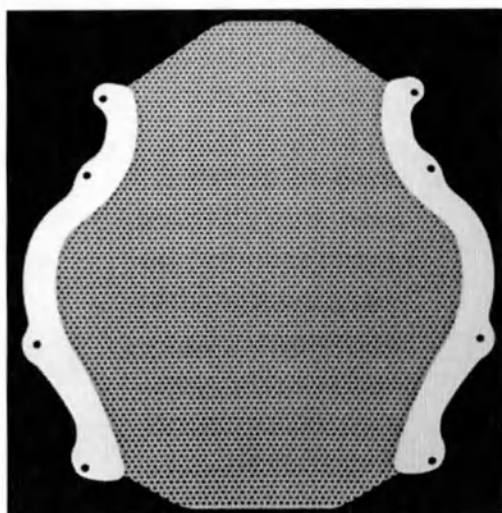


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG-BHS-A2436	2,4	146	10

Маска термопластическая Klarity для протонной терапии, тип Proton-K

Маска термопластическая Klarity для протонной терапии, тип Proton-K, модели: RG-PH-2436C, RG-PH-3242C

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, выполненной из термопластика Klarity Green, представлен на рисунке ниже.

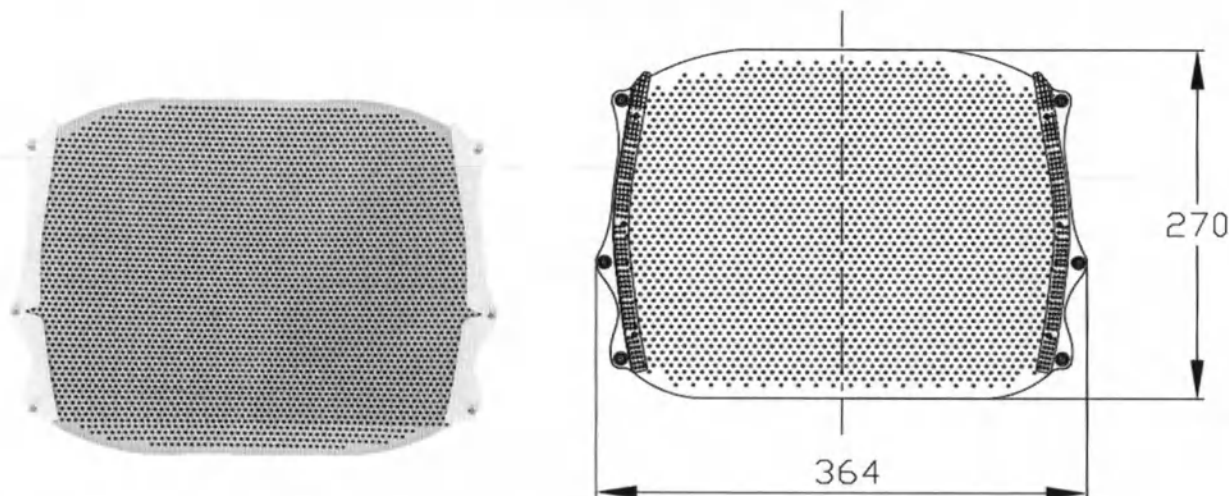


Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG-PH-2436C	2,4	254	10
RG-PH-3242C	3,2	262	10


Маска термопластическая Klarity для протонной терапии, тип Proton-K, модели: RG-PS-2436C, RG-PS-3242C

Внешний вид маски термопластической для фиксации головы, шеи и плеч, выполненной из термопластика Klarity Green, представлен на рисунке ниже.

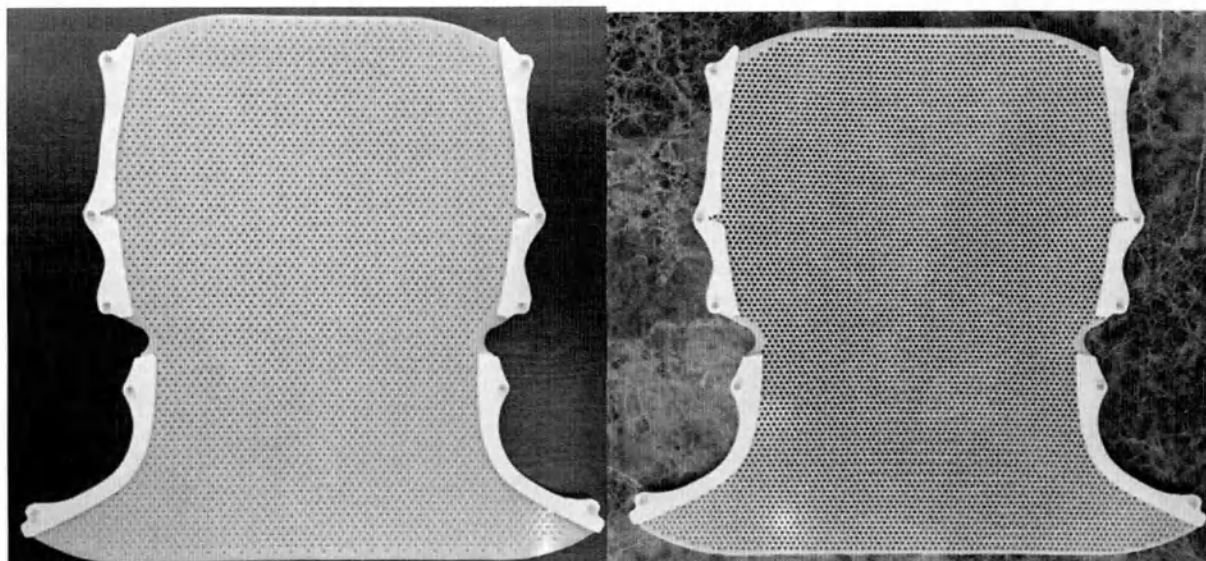

RG-PS-2436C

RG-PS-3242C

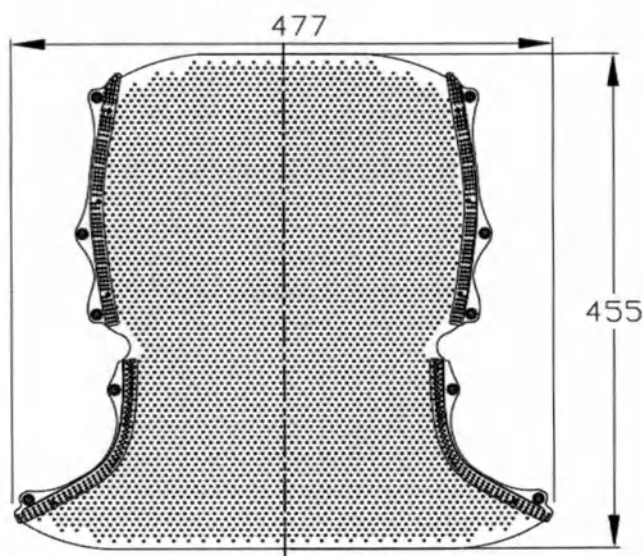

Основные технические характеристики:

Модель	Толщина термопластика, мм	Масса, г	Упаковка, шт
RG-PS-2436C	2,4	395	10
RG-PS-3242C	3,2	408	10

Материалы

Сведения о материалах, непосредственно контактирующих с организмом человека.

Маска термопластическая Klarity белая (вставка)	Поликапролактон марки CAPA 6500, производства Perstorp UK Ltd, Великобритания
Маска термопластическая Klarity зеленая (вставка)	Поликапролактон марки CAPA 6500, производства Perstorp UK Ltd, Великобритания, краситель флуоресцентный зеленый марки DP-17, производства Huangshan DePing Chemical Co., Ltd, Китай
Маска термопластическая Klarity синяя (вставка)	Поликапролактон марки CAPA 6500, производства Perstorp UK Ltd, Великобритания, краситель флуоресцентный синий марки DP-19 производства Huangshan DePing Chemical Co., Ltd, Китай, присадка диоксид кремния, марки 325 mesh, производства Sciencelab.com, Inc., США
Маска термопластическая Klarity светло-зеленая (вставка)	Смесь: 50% Поликапролактон марки CAPA 6507C, производства Perstorp UK Ltd, Великобритания, краситель флуоресцентный зеленый марки D P- 17, производства Huangshan DePing Chemical Co., Ltd, Китай + 50% Поликапролактон марки CAPA 6500, производства Perstorp UK Ltd, Великобритания
Маска термопластическая Klarity (материал покрытия)	Двухкомпонентный эластомерный полиуретан марки BAYTEC SPR-085A, производства Covestro LLC, США.
Маска термопластическая Klarity (материал мягкого покрытия модели RB430WS)	Двухкомпонентный эластомерный полиуретан марки BAYTEC SPR-085A, производства Covestro LLC, США, мягкое напыление из пенополиэтилена марки ETHAFOAM* HS-900 Natural, производства The Dow Chemical Company, США.
Маска термопластическая Klarity (рамка и крепеж)	ABS-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол, АБС) марки Lustan ABS 308, производства INEOS ABS, США неокрашенный и с добавлением черного красителя марки Iron Oxide Black DB306 (Состав: F e203-F e0 99%), производства DUBAYROX COLORS Shanghai Industrial Co.,

	Ltd., Китай
Маска термопластическая Klarity (рамка – для моделей R480E, R480W)	ABS-пластик марки Lustran ABS 308, производства INEOS ABS, США, неокрашенный с добавлением красителя флуоресцентный синий марки DP-19 производства Huangshan DePing Chemical Co., Ltd, Китай
Гранулы сыпучие	Поликапролактон марки CAPA 6308, производства Perstorp UK Ltd, Великобритания.
Фиксатор для зубов	Поликапролактон марки CAPA 6824, производства Perstorp UK Ltd, Великобритания
Прокладка для шиммирования	Гомополимер ацетала высокой вязкости марки марки Delrin 100P BK602, производства DuPont de Nemours, Inc, США
Адаптер для фиксации маски на устройства иммобилизации с креплением типа S- Type.	ABS-пластик марки Lustran ABS 308, производства INEOS ABS, США
Планка прижимная для термопластических фиксаторов многоразовая Планка прижимная для термопластических фиксаторов многоразовая удлиненная	ABS-пластик марки Lustran ABS 308, производства INEOS ABS, США

Примечание. В разделе «Технические характеристики»: Klarity White - Klarity белая, Klarity Green - Klarity зеленая, Klarity Lite Green - Klarity светло-зеленая, Klarity Blue - Klarity синяя.

Не содержит материалов животного или человеческого происхождения, лекарственных средств или фармацевтических субстанций.

Подготовка к использованию

Устройство для нагрева

Существует два способа нагрева маски для ее размягчения, а именно:

- водяная ванна;
- печь (сухая нагревательная камера).

Разогрев маски в водяной ванне:

- разогрейте воду в ванне до температуры $+70^{\circ}\text{C}$, применение воды неправильной температуры может внести существенный негативный вклад в качество получаемой маски, привести к неравномерности перфорации маски, деформации маски при извлечении из водяной ванны;

- извлеките маску из упаковки;

- поместите маску в воду, предварительно убедившись, что вода имеет нужную температуру, проследите за тем, чтобы вода полностью покрыла поверхность маски;

- после того, как термопластичный материал маски станет полностью прозрачным, извлеките заготовку из воды (нагрев занимает около 2-3 минут, недогрев или перегрев может отрицательно сказаться на качестве маски);

- промокните излишки воды сухим полотенцем;

- подождите 1-2 мин;

- убедитесь, что маска сухая и осторожно положите, и сформируйте маску на теле пациента, присоедините маску к основанию (подробнее см. далее);

- маска готова к использованию.

Размягчение маски в печи:

- разогрейте печь до температуры 70°C ;

- извлеките маску из упаковки;

- поместите маску в стойку печи;

- через 3-10 минут извлеките маску из печи, маска должна стать полупрозрачной;

- извлеките маску из печи;

- подождите 1-2 мин;

- осторожно положите, и сформируйте маску на теле пациента, присоедините маску к основанию;

- маска готова к использованию.

Использование по назначению:

- установите соответствующее креплению маски устройство для фиксации пациента (опорную плиту) на процедурный стол;

- убедитесь, что места крепления маски соответствуют местам крепления на опорной плите;

- выберите способ для нагрева маски, из приведенных в предыдущих пунктах настоящей инструкции;

- уложите пациента на устройство для фиксации пациента (опорную плиту).

Примечание: перед тем, как поместить маску на исследуемую часть тела пациента, необходимо предварительно растянуть сетку с перфорацией.

Это позволит создать более равномерное расположение отверстий на готовой маске и уменьшить эффект усадки.

- расположите маску над исследуемой частью тела пациента;

- осторожно и постепенно растяните маску так, чтобы наружная рамка коснулась устройства для фиксации пациента (опорной плиты);

- совместите места крепления маски с местами крепления на опорной плите;

Примечание: в зависимости от используемого фиксирующего устройства надежно зафиксируйте маску соответствующим креплением, либо вдавив пины в соответствующие отверстия, либо повернув зажимы и закрутив гайки;

- легким нажимом пальцев добейтесь контура исследуемой части тела пациента;

- оставьте маску на исследуемой части тела пациента на 10-15 минут для ее полного затвердевания.



Примечание: Преждевременное удаление маски с исследуемой части тела пациента может привести к избыточной усадке и дискомфорту пациента при последующем проведении ряда повторных процедур.

Гранулы используются для создания уплотнения на переносице пациента, чтобы термопластическая маска не пережимала нос.

Фиксатор для зубов захватывается ртом пациента. Прокусывать или пытаться продавить зубами фиксатор запрещено.

Удаление маски с исследуемой части тела пациента

После проведения терапевтических процедур лучевой терапии необходимо удалить маску с исследуемой части тела пациента выдавив пины из соответствующих отверстий, либо повернув зажимы и открутив гайки, в зависимости от типа крепления маски.

Сведения о совместимых медицинских изделиях

Рекомендуется использовать следующие устройства для нагрева:

- водяная ванна:

Наименование	Производитель	Регистрационное удостоверение
Система иммобилизации пациентов при подготовке и проведении лучевой терапии, вариант	"Кларити Медикал энд Эквипмент (ГЗ) Ко., Лтд." (Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd.) (Китай)	№ РЗН 2020/10750 от 04.02.2021 года.

исполнения: Вариант 1, Вариант 2.		
--------------------------------------	--	--

Наименование	Производитель	Регистрационное удостоверение
Комплект для иммобилизации пациента при топометрической подготовке и лучевой терапии	"ВФР/АКВАПЛАСТ КОРП." (WFR/AQUAPLAST CORP.) (США)	№ ФСЗ 2010/08414 от 01.12.2010 года.

■ плита для головы:

Наименование	Производитель	Регистрационное удостоверение
Комплект для иммобилизации пациента при топометрической подготовке и лучевой терапии	"ВФР/АКВАПЛАСТ КОРП." (WFR/AQUAPLAST CORP.) (США)	№ ФСЗ 2010/08414 от 01.12.2010 года.

■ печь (сухая нагревательная камера):

Наименование	Производитель	Регистрационное удостоверение
Сухожаровые сушильные шкафы серии FN, с	"Нюве Санайи Малземелери Ималат ве Тиджарет Аноним	№ РЗН 2022/17786 от 19.07.2022 года.

естественной конвекцией, вариант исполнения: - Сухожаровые сушильные шкафы серии FN 055 в составе; - Сухожаровые сушильные шкафы серии FN 120 в составе; - Сухожаровые сушильные шкафы серии FN 055N в составе; - Сухожаровые сушильные шкафы серии FN 120N в составе; - Сухожаровые сушильные шкафы серии FN 400 в составе; - Сухожаровые сушильные шкафы серии FN 500 в составе.	Ширкети" (Nüve Sanayi Malzemeleri İmalat ve Ticaret Anonim Şirketi) (Турция)	
--	---	--

В зависимости от типа крепления и особенностей конструкции, термопластические маски совместимы и используются со следующими системами:

Наименование	Производитель	Регистрационное удостоверение
--------------	---------------	-------------------------------

Система иммобилизации пациентов при подготовке и проведении лучевой терапии, вариант исполнения: Вариант 3, Вариант 4, Вариант 5, Вариант 7.	"Кларити Медикал энд Эквипмент (ГЗ) Ко., Лтд." (Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd.) (Китай)	№ РЗН 2020/10750 от 04.02.2021 года.
--	---	---

Рентгенографическая система позиционирования и верификации положения пациента ЕхасТрас с принадлежностями	"БрэйиЛАБ АГ" (BrainLAB AG) (Германия)	№ ФСЗ 2010/07558 от 30.07.2010 года.
---	--	---

Система лучевой терапии TrueBeam с принадлежностями	"Вариан Медикал Системс, Инк." (Varian Medical Systems, Inc.) (США)	№ ФСЗ 2010/07755 от 04.10.2022 года.
---	--	---

Система радиотерапевтическая нейрохирургическая	"Электа Инструмент АБ" (Elekta Instrument AB,) (Швейция)	№ ФСЗ 2009/04735 от 28.03.2018 года
---	--	--

LEKSELL Gamma Knife с принадлежностями		
---	--	--

Система стереотаксическая радиотерапевтическая Versa HD с принадлежностями	"Электа Лимитед" (Elekta Limited) (Великобритания)	№ РЗН 2015/2407 от 25.08.2023 года.
--	--	--

Система протонной терапии ProBeam с принадлежностями	"Вариан Медикал Системс Партикал Терапии ГмбХ" (Varian Medical Systems Particle Therapy GmbH) (Германия)	№ РЗН 2015/2315 от 17.03.2015 года
--	---	---------------------------------------

Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Маска должна эксплуатироваться в условиях:

- Температура: от +10 до +30°C;
- Влажность: максимум 90 %.

Маска является изделием многократного применения в рамках одного курса лучевой терапии для одного пациента.

Маски должны храниться в сухом, чистом месте на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

- Температура: от +10 до +30°C;
- Влажность: не более 90 %.

Маски должны храниться горизонтально, должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей.

Маски должны транспортироваться в условиях:

- Температура: от -30 до + 30 °C;
- Влажность: не более 90 %.

Упаковка

Каждая маска упакована в прозрачный пакет и уложена на защитный уплотнитель из вспененного полиуретана.

Прочие комплектующие (гранулы сыпучие, фиксатор для зубов, адаптеры, планки) также упакованы в прозрачный полиэтиленовый пакет.

Очистка, дезинфекция, стерилизация.

Маска не требует проведения очистки, дезинфекции или стерилизации.

Перед применением фиксатора для зубов, необходимо промыть его в мыльном водном растворе комнатной температуры, с последующей протиркой безворсовой мягкой тканью.

Адаптеры и планки не требуют проведения очистки, дезинфекции или стерилизации.

Срок службы

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года с момента продажи.

Гарантийный срок хранения: 3 года.

Критерии непригодности изделия к использованию

Не используйте изделие, если:

- срок хранения или эксплуатации изделия истек;
- если вы получили это изделие с дефектами поверхности, например, со сколами, изгибами, неравномерной толщиной, неравномерной окраской или другое;
- если вы получили изделие без упаковки или маркировки;
- если идентифицировать изделие невозможно.

Утилизация

Изделие относится к эпидемиологически безопасным отходам, приближенным по составу к твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии и согласно правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 как отходы класса А.

Использованное изделие может рассматриваться как бытовые отходы.

Изделие при использовании, транспортировке и хранении данное медицинское изделие не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям, обозначенным в настоящей технической документации при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящей технической документацией, а также инструкцией по применению.

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года с момента продажи.

Гарантийный срок хранения: 3 года.

Адрес для приема рекламаций: ООО «Мед-Спектрум», 143345, Московская область, г. Наро-Фоминск, д. Мишуткино, ул. Солнечная 1-я, д. 91, стр. 1, Тел: +7(495) 796-24-23, E-mail: info@med-spectrum.ru.

Уполномоченный представить производителя в России

ООО «Мед-Спектрум», 143345, Московская область, г. Наро-Фоминск, д. Мишуткино, ул. Солнечная 1-я, д. 91, стр. 1, Тел: +7(495) 796-24-23, E-mail: info@med-spectrum.ru

Перечень применяемых национальных и международных стандартов

- ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р МЭК 62366-1-2023 «Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности»;

- ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023 «Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования»;

- ГОСТ ISO 14971-2021 «Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям»;

- ГОСТ 31214-2016. «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, предоставляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность»;

- ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»

- ГОСТ ISO 10993-1-2021. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

- ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ ISO 10993-12-2015. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы»

- ГОСТ 31209-2003 «Контейнеры для крови и ее компонентов. Требования химической и биологической безопасности и методы испытаний»;

- ГОСТ 4011-72. «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа». п. 2

- ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии» п. 4

- МУК 4.1.3166-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанол а, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, α -метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава»;

- МР 1328-75 «Методические рекомендации по определению капролактама в воде, воздухе и биологических средах»;

- И-880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»;

- МВИ.МН.1924-2003 «Методика газохроматографического определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах, имитирующих пищевые продукты»;
- МР 1436-76 «Методические рекомендации к определению дифенилолпропана, а также некоторых фенолов в его присутствии, при санитарно-химических исследованиях изделий из полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»;
- МР 2413-81 «Методические рекомендации по определению эпихлоргидрина в выданных вытяжках из полимерных материалов»;
- ГОСТ Р 55227-2012 «Вода. Методы определения содержания формальдегида» п. 6.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Стьюарт Ирен (Stewart Iren) (имя и фамилия), 16В, Ле Вилладж, 49 Вилладж Роуд, Хэппи Вэлли, Гонконг (16B, Le Village, 49 Village Road, Happy Valley, HK) (адрес), официально заявляю, что:

Я заявляю, что прилагаемый документ является оригинальным документом, *приложением, обозначаемым как А.*

/Печать: ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ/

Кроме того, я утверждаю, что сведения, указанные мной в настоящем заявлении, соответствуют действительности, а также Приказу о присяге и заявлениях.

/подпись/

(подпись заявляющего лица)

Заявлено в Управлении Центрально-западного района в Специальном административном районе Гонконг сегодня, 09 августа 2024 г.

"Согласно устному переводу, выполненному _____ (имя и фамилия), _____ (адрес и должность), вышеуказанный устный переводчик также сначала заявил(а)/заявил(а) под присягой*, что он (она)* выполнил(а) достоверный, четкий и внятный устный перевод сведений, содержащихся в настоящем документе, для заявляющего лица, а также что он (она)* будет выполнять достоверный и добросовестный устный перевод заявления, которое будет передано ему (ей)*."

/Вышеуказанный текст зачеркнут/ /подпись/

В моем присутствии

Квок Лай-ян (Kwok Lai-yan)

/подпись/

Должностное лицо, уполномоченное совершать нотариальные действия

"Я, _____ (имя и фамилия), _____ (адрес), официально заявляю/заявляю под присягой*, что я хорошо понимаю официальный язык, на котором составлен настоящий документ, и _____ язык, а также что я выполнил(а) достоверный, четкий и внятный устный перевод сведений, содержащихся в настоящем документе, для заявляющего лица _____ (имя и фамилия), а также что я буду выполнять достоверный и добросовестный устный перевод заявления, которое будет передано ему (ей)*."

(подпись устного переводчика)

Заявлено/заявлено под присягой* в _____ в Специальном административном районе Гонконг сегодня, _____.

В моем присутствии

Должностное лицо, уполномоченное совершать нотариальные действия"

/Вышеуказанный текст зачеркнут/ /подпись/

#...# Удалите соответствующие параграфы, если услуги устного переводчика не использовались.

* Удалите в соответствующих случаях.

HAD 5 (S), ред. 10.2020

/Логотип: Klarity/

Штамп:

Это приложение, обозначенное как А,
упомянутое в заявлении Стьюарта Ирена,
который представил заявление в моем
присутствии 9 августа 2024 г.

Квок Лай-ян /подпись/

Должностное лицо, уполномоченное
совершать нотариальные действия
Управление Центрально-западного района

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ медицинского изделия



"Кларити Медикал энд Эквипмент (ГЗ) Ко., Лтд.",
(Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd.)

Маска термопластическая Klarity, в вариантах исполнения

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

компании «"Кларити Медикал энд Эквипмент (ГЗ) Ко., Лтд."»

/подпись/ Люси Ли (Lucy Lee)

Печать

/Печать: «"Кларити Медикал энд Эквипмент (ГЗ) Ко., Лтд."»/

Дата: 09.07.2024

Ред. 2.0, 07-2024

Производитель:

"Кларити Медикал энд Эквипмент (ГЗ) Ко., Лтд."

Этажи 1–6, Третья Стрит Шавань, № 14, Зона экономического и технологического развития

Гуанчжоу, 510730, Гуанчжоу, Китай

(1-6 Floors, No. 14, 3rd Street Shawan, GETDD, 510730, Guangzhou, China)

Тел.: +86 20 82226380. Факс: +86 20 82088552

Настоящий Апостиль удостоверяет только подлинность подписи и должность лица, подписавшего официальный документ, и, в соответствующих случаях, подлинность печати или штампа, которыми скреплен официальный документ. Настоящий Апостиль не является подтверждением верности содержащихся в документе сведений. Проверить выдачу настоящего Апостиля можно по адресу: https://www.judiciary.hk/zh/court_services_facilities/apostille_verification.html.

АПОСТИЛЬ (Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)			
1. Страна:		Гонконг, Китай	
Настоящий официальный документ			
2. подписан		КВОК Лай-ян	
3. выступающей в качестве		Должностного лица, уполномоченного совершать нотариальные действия	
4. скреплен печатью/штампом		КВОК Лай-ян	
Удостоверено			
5. в	Высоком суде	6.	12.08.2024
7.	Саймоном КВАНГОМ (Simon KWANG) Регистратором Высокого суда		
8. за номером	99976 / 2024		
9. Печать/штамп:		10. Подпись:	/подпись/

Ссылочный код: 8DF14B70

/Печать: ПЕЧАТЬ ВЫСОКОГО СУДА * ГОНКОНГ/

Перевод данного текста выполнен переводчиком Павленко Владиславом Станиславовичем.

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать девятого августа две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Павленко Владислава Станиславовича.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2024- **55-536**
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Квитко

Ф.А. Квитко

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью **21** лист(а)(ов)

Нотариус

Квитко

