

GAZİANTEP 11. NOTERİ
İRFAN EREN GÜNEŞ

№ 24878
"ONAYLAYAN"

Sevinçler Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.

Genel Müdür

(pozisyon)

Yasin Sevinç

(isim&soyisim)

sevinçler
sağlık ürünleri

Sevinçler Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
S. Org. San. Böl. 8350 / (11172a) No 9 / Çarşı / GAZİANTEP
T: 414 4150 • F: 0342 831 57 00 • 0342 137 57 04
Sehirkamulu, D. Beğirhanlı 126 065 0977
www.sevincler.com.tr

10.09.2024

KULLANIM TALIMATLARI

Tıbbi cihaz

LIVDRY® yetişkin bezleri

Üretici Sevinçler Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş., Türkiye

11-09-2024

ASLININ
AYNISIDIR

GAZİANTEP 11. NOTERİ
İRFAN EREN GÜNEŞ
10.09.2024



2. Versiyon

İçindekiler

TIBBİ CİHAZ ADI	3
TIBBİ CİHAZIN ÜRETİCİSİ HAKKINDA BİLGİ	3
TIBBİ CİHAZ AMACI	3
KULLANIM ENDİKASYONLARI	3
KONTRENDİKASYONLAR.....	3
TIBBİ CİHAZ SINIFLANDIRMASI.....	4
TEKNİK ÖZELLİKLER.....	5
İŞARETLEME.....	12
PAKETLEME.....	44
OPERASYONEL ÖZELLİKLER	45
UYGULAMA ÖNERİLERİ.....	46
GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ.....	46
ÇEVRE GÜVENLİĞİ.....	46
KABUL KURALLARI.....	47
KONTROL METODOLOJISI.....	47
EKİPMAN, TAŞIMA, DEPOLAMA, BERTARAF.....	48
GARANTİLER VE SORUMLULUK.....	48
STANDARTLARIN LİSTESİ	49
ULUSAL RE STANDARTLARI LİSTESİ.....	49
ÜRETİCİNİN RUSYA'DAKİ YETKİLİ TEMSİLCİSİ.....	49



TIBBİ CİHAZIN ADI VE BÜTÜNLÜĞÜ

Adı:

LIVDRY® yetişkin bezleri

Nº 24878

I. Ürün çeşitleri:

1. Yetişkin bezleri LIVDRY®, bedenler: M, L - 10 adet/paket.
2. Yetişkin bezleri LIVDRY®, bedenler: M, L - 30 adet/paket.
3. Yetişkin bezleri (külot) LIVDRY®, bedenler: M, L - 10 adet/paket.
4. Yetişkin bezleri (külot) LIVDRY®, bedenler: M, L - 30 adet/paket.

II. Kullanım talimatları - 1 adet.

Bundan sonra "yetişkin bezleri", "tıbbi cihaz", "ürün" olarak kısaltılacaktır.

Bileşim:

LIVDRY® yetişkin bezleri.

I. Ürün çeşitleri:

1. LIVDRY® yetişkin bezleri, bedenler: M, L - 10 adet/paket.
2. LIVDRY® yetişkin bezleri, bedenler: M, L - 30 adet/paket.
3. Yetişkin bezleri (külot) LIVDRY®, bedenler: M, L - 10 adet / paket.
4. Yetişkin bezleri (külot) LIVDRY®, bedenler: M, L - 30 adet/paket.

II. Kullanım talimatları - 1 adet (kağıt üzerinde ve (veya) bilgi ve telekomünikasyon ağı İnternet'e yerleştirme yoluyla elektronik bir belge şeklinde sağlanır).

TIBBİ CİHAZIN ÜRETİCİSİ HAKKINDA BİLGİ

Üretici firma

Sevinçler Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.

BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAH. O.S.B. 5. BÖLGE 83557 NOLU CAD. NO: 9 İÇ KAPI

NO: 1 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP / Türkiye

Tel: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00

info@sevinclersaglik.com

www.sevinclersaglik.com

Üretim yeri

SEVİNÇLER SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANÜNİM ŞİRKETİ

BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAH. O.S.B. 5. BÖLGE 83557 NOLU CAD. NO: 9 İÇ KAPI

NO: 1 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP / Türkiye

TIBBİ CİHAZ AMACI

LIVDRY® yetişkin bezleri yetişkin idrarını ve dışkısını emmek ve tutmak için tasarlanmıştır, idrarını tutamayan hastaların, yatalak hastaların bakımı için ve diğer gerekli durumlarda kullanılır. Evde ve/veya sağlık bakım ortamlarında kullanın.

KULLANIM ENDİKASYONLARI

Orta ila şiddetli inkontinansı olan yetişkin hastaların bakımı için.

KONTRENDİKASYONLAR

Yetişkin bezi bileşenlerine karşı olası bireysel intolerans.



Olası yan etkiler:

Ürünlerin kullanımına ilişkin tavsiyelere uyulmaması durumunda olası alerjik reaksiyonlar - pişik, cilt tahrişi.

TIBBİ CİHAZ SINIFLANDIRMASI

Tıbbi cihazların isimlendirme sınıflandırmasına göre bir tıbbi cihazın potansiyel risk sınıfı - 1.

Tıbbi cihazların isimlendirme sınıflandırmasına göre tıbbi cihaz tipi:

280360 (Yetişkin hasta bezleri).

233900 (Yetişkinler için üriner inkontinans külotlu yetişkin bezi, tek kullanımlık).

Yetişkin bezini kullanan kişinin bel ölçüsüne bağlı olarak bir beden sınıflandırması vardır (Tablo 1)

GOST R 55082-2012'ye göre sınıflandırma:

Grup adı hasta bezleri	Bel çevresi aralığı, cm	Birim tanımı hasta bezi beden grubu
LIVDRY yetişkin bezleri®		
Ortalamalar	85-125	M
Büyük	100-150	L
Yetişkin bezleri (külotlu) LIVDRY®		
Ortalamalar	70-120	M
Büyük	100-150	L

Kişinin bel/kalça çevresine bağlı olarak değişir:

Orta - Yetişkin bezleri LIVDRY®, beden: M, Yetişkin bezleri (külotlu) LIVDRY®, beden: M.®

Büyük - LIVDRY® Yetişkin Bezleri®, beden: L, LIVDRY® Yetişkin Bezleri (külotlu)®,

beden: L.

Emilen sıvı miktarına bağlı olarak - şiddetli inkontinansı olan kişiler için.

GOST R 57889-2021'e göre sınıflandırma:

Boyut:

M - Yetişkin bezleri LIVDRY®, beden: M, Yetişkin bezleri (külotlu) LIVDRY®, beden: M.® L

- Yetişkin bezleri LIVDRY®, beden: L, Yetişkin bezleri (külotlu) LIVDRY®, beden: L.

Emdikleri sıvı miktarına bağlı olarak - şiddetli inkontinans için. Sızıntıdan önce emdikleri sıvı miktarına bağlı olarak (sızıntıdan önce emilim) - 4.




TEKNİK ÖZELLİKLER

LIVDRY yetişkin bezi tasarımı®

Yetişkin bezleri birkaç katmandan oluşur (Şekil 1).

No 248 7.8

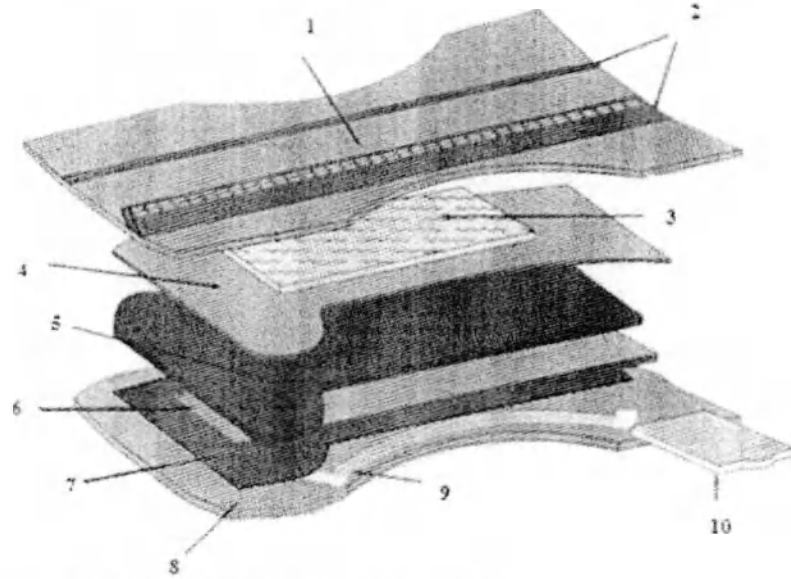

Şekil 1: LIVDRY yetişkin bezi tasarımı®

- 1 - Üst örtü tabakası;
- 2 - Üzerinde iki elastik bant bulunan sıvı sızıntısını önleyen koruyucu tabaka;
- 3 - Emici ve dağıtıcı katman, bezin emilim oranını artırma ve salgıların tek bir yerde birikmesini önlemek için sıvıyı bez boyunca dağıtma işlevine sahiptir.
- 4, 6 -Bariyer elemanları - üst bariyer mendili (-4) ve alt bariyer mendili (-6), bez dolu olduğunda bile emici tabakanın orijinal konumunda kalmasını sağlar.
- 5 - Ana emici tabaka.
- 7 - Emici tabaka ve altındaki tabakalar, üzerinde baskılı resimler bulunan **koruyucu bir tabaka** ile kaplıdır. Bu katman, tüm sıvıyı bezin içinde tutmaya yardımcı olarak sızıntıyı önler.
- 8 -Islaklık gösterge alanına sahip alt kapak katmanı - bez sıvı ile dolduğunda kaybolan özel baskılı semboller
- 9 - Bacak manşetleri. Bunlar, hasta bezi kullanıcısının bacaklarını çevreleyen üç elastik banttır.
- 10 - Sabitleme elemanları - tokalar. Velcro malzemeden yapılmıştır ve Velcro'dur (halka-kanca sistemi), her iki tarafta 2 adettir, hasta bezini açmak ve kapatmak için kullanılabilir.

LIVDRY yetişkin bezlerinin bileşimi:

Bileşen	İsim malzeme	Yap/Kompozisyon	Üretici firma
1. Üst örtü katmanı	PP Spunbond Nonwoven / PP Spunbond Nonwoven	Isıyla bağlanmış polipropilen iplikten dokunmamış kumaş (%100 polipropilen), beyaz renk (titanyum dioksit CI 77891)	Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Türkiye)



2.1. Koruyucu katman (üst katman)	2.1. PP Spundbond Nonwoven / PP Spundbond Nonwoven	2.1. Isıyla bağlanmış polipropilen iplikten dokunmamış kumaş (%100 polipropilen), beyaz renk (titanyum dioksit CI 77891)	1. Küresel Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Türkiye)
2.2. Elastik elastik bant	2.2. Spandex Elyaf/ Spandex	2.2. Sgeoga®/Segmentli Poleurethane-urea (>%95); stabilizatör (%0,5); Dimetilasetamid (<%0,6) CAS No.: 127-19-5; titanyum dioksit (%2) CAS No.: 13463-67-7; polidimetilsiloksan (%1) CAS No: 63148-62-9.	2.2. Hyosung Corporation (Kore)
3. Emici ve dağıtım katmanı	Nonwoven Karde - Hava Yoluyla Bağlanmış / Karde nonwoven kumaş	Akinal / (Polyester elyaf (PET)), mavi boyalı boya (CI 74160)	Akinal Sentetik Tekstil San.ve Tic.A.Ş. (Türkiye)
4. Bariyer elemanı - Üst bariyer silme	PP Spundbond Nonwoven / PP Spundbond Nonwoven	Polipropilen ipliklerden (%100 polipropilen) yapılmış ısıyla bağlanmış dokunmamış kumaş, beyaz renk (titanyum dioksit CI 77891)	Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Türkiye)
5. Temel emici tabaka	1) SAP / SAP (Sup. emici polimer); 2) Hav Hamuru/Selüloz	1) FAVOR SXM 9155/ Sodyum poliakrilat CAS-No: 9003-04-7 2) GP-S10 / selüloz CAS-No: 65996-61-4 (%93); su CAS-No.: 7732-18-5 (%7).	1) Evonik Nutrition & Care GmbH (Almanya) 2) GP Selüloz GmbH (İsviçre)
6. Bariyer elemanı - Alt bariyer silme	PP Spundbond Nonwoven / PP Spundbond Nonwoven	Polipropilen ipliklerden (%100 polipropilen) yapılmış ısıyla bağlanmış dokunmamış kumaş, beyaz renk (titanyum dioksit CI 77891)	Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Türkiye)
7. Koruyucu katman (alt)	1) Nefes almayan PE Film/ Nefes almayan polietilen film Film 2) Tipografik mürekkep	1) Gülsan/polietilen 2) Videojet® V499-D	1) GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Türkiye) 2) Videojet Technologies, Inc.
8. Alt örtü tabakası ile gösterge alanı	1) PP Spundbond Nonwoven / PP Spundbond	1) Aşağıdakilerden yapılmış ısı ile bağlanmış dokunmamış kumaş polipropilen iplikler	1) Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Türkiye)
Nem gösterge alanına sahip alt örtü katmanı	Nonwoven 2) Tipografik mürekkep	(%100 polipropilen), beyaz renk (titanyum dioksit CI 77891) 2) Videojet® V499-D	2) Videojet Technologies, Inc. (İNGİLTERE)

9. Bacak manşetleri	Spandex Elyaf/ Spandex	Sreoga® / Segmentli poliüretan üre (>%95); stabilizatör (%0,5); Dimetilasetamid (<%0,6) CAS No.: 127-19-5; titanyum dioksit (%2) CAS No.: 13463-67-7; polidimetilsiloksan (%1) CAS No: 63148-62-9	Hyosung Corporation (Kore)
10. Sabitleme elemanları şunlardır. klipsler	NW KAPATMA BANTLARI (NW(Y- bağ)/ Şerit bağlantı elemanı (NW(Y- bağ)	Nitto / Polipropilen (%20), poliolefin film (%35), yapıştırıcı (%35), kanca (~%10)	NITTO BENTO BANTÇILIK TEM. MAD.SAN.TİC. A.Ş. (Türkiye)

Diğer malzemeler:

Bileşen	İsim malzeme	Marka / bileşim	Üretici firma
Tutkal için kat yapıştırma	Hotmelt / Isıyla eriyen yapıştırıcı	NW1038 ZP/ Polimerler %60, termoplastik elastomerler %20, mineral yağ %17, katkı maddeleri %2,5, antioksidan 0,5%.	H.B. Fuller Deutschland GmbH (Almanya)
Elastik yapıştırıcı	Hotmelt / Isıyla eriyen yapıştırıcı	Lunatack D 7214 ZP/ Hidrojenlenmiş hidrokarbon reçinesi %64, termoplastik kauçuk %15, petrol distilatları (parafin) %15, reçine alfa-metilstiren baz %5,5, antioksidan %0,5.	H.B. Fuller Deutschland GmbH (Almanya)

Kütle ve Boyutsal Özellikler:

Yetişkin hasta bezleri LIVDRY®, beden: M

Ürün numarası	Gösterge	Özellikler	İzin verilebilir sapma
Ağırlık			
1	SAP (d)	9	± 1
2	Çözünmüş selüloz (g)	45	± 1
Boyutlar			
3	Genişlik (mm)	690	± 5
4	Uzunluk (mm)	800	± 5
5	Emici tabakanın uzunluğu (mm)	635	± 10
6	Koruyucu katman (genişlik, mm)	575	± 5
7	Üst kapak katmanı (genişlik, mm)	240	± 5
8	Toka (uzunluk, mm)	30	± 5




Yetiřkin bezleri LIVDRY[®] , beden: 1

Ürün numarası	Gösterge	Özellikler	İzin verilebilir sapma
Ağırlık			
1	SAP (d)	12	± 1
2	Çözünmüş selüloz (g)	50	± 1
Boyutlar			
3	Genişlik (mm)	790	± 5
4	Uzunluk (mm)	925	± 5
5	Emici tabakanın uzunluğu (mm)	740	± 10
6	Koruyucu katman (genişlik, mm)	675	± 5
7	Üst kapak katman: (genişlik, mm)	235	± 5
8	Toka (uzunluk, mm)	30	± 5

LIVDRY[®] yetiřkin bezlerinin (külotlularının) yapısı


LIVDRY yetiřkin bezlerinin (külotlularının) yapısı* (Şekil 2).

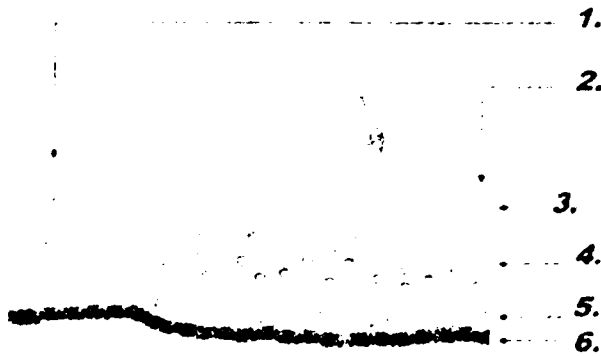

Şekil 2. LIVDRY yetiřkin bezlerinin (külotlu) yapısı*

- 1 - koruyucu tabaka;
- 2 - üst kapak katmanı;
- 3 - dağıtım katmanı;
- 4 - emici tabaka;
- 5 - koruyucu tabaka;
- 6 - nem gösterge alanına sahip alt kapak katmanı.

LIVDRY yetiřkin bezlerinin (külotlularının) dış yapısı* (Şekil 3).

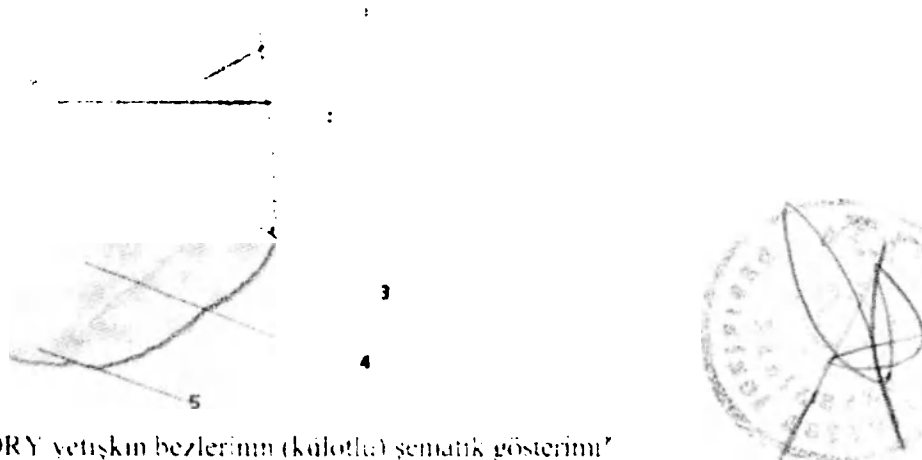

Şekil 3. LIVDRY yetiřkin bezlerinin (külotlu) şematik gösterimi*

- 1 - Elastik bant;
- 2 - Çamaşırları atılmak üzere katlarken kullanılan yapışkan bant;
- 3 - Bir adamın bacaklarını çevreleyen kelepçeler;
- 4 - yetişkin bezlerinin (külotlularının) yüzeyinde bulunan elastik bantlar LIVDRY®;
- 5 - Metin şeklinde sunulan nem göstergesi (üretim tarihi ve saati, boyut).

LIVDRY® yetişkin bezlerinin (külotlu) bileşimi:

Bileşen	İsim malzeme	Yap/Kompozisyon	Üretici firma
1. Koruyucu katman (üst katman)	PP Spundbond Nonwoven / PP Spundbond Nonwoven	Polipropilen ipliklerden (%100 polipropilen) yapılmış ısıyla bağlanmış dokunmamış kumaş, beyaz renk (titanyum dioksit CI 77891)	Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Türkiye)
2. Üst örtü tabakası	PP Spundbond Nonwoven / PP Spundbond Nonwoven	Polipropilen ipliklerden (%100 polipropilen) yapılmış ısıyla bağlanmış dokunmamış kumaş, beyaz renk (titanyum dioksit CI 77891)	Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Türkiye)
3. Yayılan katman	Nonwoven Taraklı - Hava Yoluyla Yapıştırılmış / Taraklı dokumasız malzeme	Akınal / (Polyester elyaf (PET)), beyaz boya ile boyanmış (CI 77891)	Akınal Sentetik Tekstil San.ve Tic.A.Ş. (Türkiye)
4. emici tabaka	1) SAP / SAP (Sup. emici polimer); 2) Hav Hamuru/Selüloz	1) FAVOR SXM 9155/ Sodyum poliakrilat CAS-No: 9003-04-7 2) GP-S10 / selüloz CAS- No: 65996-61-4 (%93); su CAS-No: 7732-18-5 (%7)	1) Evonik Nutrition & Care GmbH (Almanya) 2) GP Cellulose GmbH (İsviçre)
5. Koruyucu katman (alt)	Nefes almayan PE Film/ Nefessiz polietilen film	Gülsan/polietilen	GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Türkiye)
6. Nem göstergesi alanına sahip alt örtü katmanı	1) PP Spundbond Nonwoven / PP Spundbond Nonwoven 2) Tipografik mürekkep	1) Isıyla bağlanmış polipropilen iplikten dokunmamış kumaş (%100 polipropilen), beyaz renk (titanyum dioksit CI 77891) 2) Videojet® V499-D	1) Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Türkiye) 2) Videojet Technologies, Inc. (İNGİLTERE)
7. Zona	Spandex Elyaf/ Spandex	Sreoga® / Segmentli poliüretan ipe (-%95); stabilizatör (%0,5);	Hyosung Corporation (Kore)

Bileşen	Malzemenin adı	Yap/Kompozisyon	Üretici firma
---------	----------------	-----------------	---------------

1. Koruyucu katman (üst katman)	PP Spundbond Nonwoven / PP Spundbond Nonwoven	Isıyla bağlanmış polipropilen iplikten dokunmamış kumaş (%100 polipropilen), beyaz renk (titanyum dioksit CI 77891)	Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Türkiye)
2. Üst örtü tabakası	PP Spundbond Nonwoven / PP Spundbond Nonwoven	Isıyla bağlanmış polipropilen iplikten dokunmamış kumaş (%100 polipropilen), beyaz renk (titanyum dioksit CI 77891)	Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Türkiye)
3. Yayılan katman	Nonwoven Karde - Hava Yoluyla Bağlanmış/ Karde dokunmamış kumaş	Akınal / (Polyester elyaf (PET)), beyaz boyalı (CI 77891)	Akınal Sentetik Tekstil San.ve Tic.A.Ş. (Türkiye)
4. emici tabaka	1) SAP / SAP (Süper Emici Polimer); 2) Kabartılmış Kağıt Hamuru/Selüloz	1) FAVOR SXM 9155/sodyum poliakrilat CAS-No.: 9003-04-7 2) GP-S10 / selüloz CAS-No.: 65996-61-4 (%93); su CAS-No.: 7732-18-5 (%7)	1) Evonik Nutrition & Care GmbH (Almanya) 2) GP Cellulose GmbH (İsviçre)
5. Koruyucu katman (alt)	Nefes almayan PE Film/ Nefes almayan PE Film	Gülsan/polietilen	GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Türkiye)
6. Nem gösterge alanına sahip alt örtü katmanı	1) PP Spundbond Nonwoven / PP Spundbond Nonwoven 2) Tipografik mürekkep	1) Isıyla bağlanmış polipropilen iplikten dokunmamış kumaş (%100 polipropilen), beyaz renk (titanyum dioksit CI 77891) 2) Videojet® V499-D	1) Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Türkiye) 2) Videojet Technologies, Inc. (Birleşik Krallık)
7. Elastik bant	Spandex Elyaf/ Spandex	Sreoga® / Segmentli poliüretan üre (>%95); stabilizatör (%0,5); dimetilasetamid (<%0,6) CAS No.: 127-19-5; titanyum dioksit (%2) CAS No.: 13463-67-7; polidimetilsiloksan (%1) CAS No.: 63148-62-9	Hyosung Corporation (Kore)
8. Bacak manşetleri	Spandex Elyaf/ Spandex	Sreoga® / Segmentli poliüretan üre (>%95); stabilizatör (%0,5); dimetilasetamid (<%0,6) CAS No.: 127-19-5; titanyum dioksit (%2) CAS No.: 13463-67-7; polidimetilsiloksan (%1) CAS No.: 63148-62-9	Hyosung Corporation (Kore)

9. Keten yüzeyinde lastik bantlar	Spandex Elyaf / Spandex	Sreoga 8 / Segmentli poliüretan üre (<%95), stabilizatör (%0,5); dimetilasetamid (<%0,6) CAS No.: 127-19-5; titanyum dioksit (%2) CAS No.: 13463-67-7; polidimetilsiloksan (%1) CAS No.: 63148-62-9	Hyosung Corporation (Kore)
10. Yapışkan bant	İmha Bantları / İmha Yapışkan Bant	Nitto / poliolefin film (PP Film) - %60, yapıştırıcı - %40	NITTO BENTO BANTÇILIK TEM. MAD.SAN.TIC. A.Ş. (Türkiye)

Diğer malzemeler:

Bileşen	İsim malzeme	Marka / bileşim	Üretici firma
Tutkal için kat yapıştırma	Hotmelt / Isıyla eriyen yapıştırıcı	NW1038 ZP Polimerler %60, termoplastik elastomerler %20, mineral yağ %17, katkı maddeleri %2,5, antioksidan 0,5%	H.B. Fuller Deutschland GmbH (Almanya)
Elastik yapıştırıcı	Hotmelt / Isıyla eriyen yapıştırıcı	Lunatack D 7214 ZP Hidrojenlenmiş hidrokarbon reçinesi %64, termoplastik kauçuk %15, petrol distilatları (parafin) %15, reçine bazlı alfa metil stiren 5,5, antioksidan %0,5	H.B. Fuller Deutschland GmbH (Almanya)

Kütle ve Boyutsal Özellikler:

Yetişkin bezleri (külotlu) LIVDRY[®], beden: M

Ürün numarası	Gösterge	Özellikler	İzin verilebilir sapma
	Ağırlık		
1	SAP (Süper Emici Polimer) (g)	11	+ 1
2	Çözülmüş selüloz (g)	33	± 1
	Boyutlar		
3	Genişlik (mm)	635	± 5
4	Uzunluk (mm)	795	± 5
5	Emici tabakanın uzunluğu (mm)	480	± 10



Yetişkin bezleri (külotlu) LIVDRY®, beden: L

Ürün numarası	Gösterge	Özellikler	İzin verilebilir sapma
Ağırlık			
1	SAP (Süper Emici Polimer) (g)	13	± 1
2	Çözünmüş selüloz (g)	33	± 1
Boyutlar			
3	Genişlik (mm)	755	± 5
4	Uzunluk (mm)	850	± 5
5	Emici tabakanın uzunluğu (mm)	500	± 10

İŞARETLEME**1. Tüketici ambalajlarının etiketlenmesi**

Bir tıbbi cihazın tüketici grubu ambalajı (paketi) üzerinde aşağıdakiler belirtilmelidir:

- tıbbi cihazın adı;
 - üreticinin ülkesi;
 - üreticinin adı ve adresi, üreticinin iletişim bilgileri;
 - sipariş üzerine üretilmiştir;
 - kayıt sertifikasının numarası ve düzenlenme tarihi;
 - tıbbi cihazın özelliklerinin ve kullanımının kısa açıklaması (inkontinans derecesi, tıbbi cihazın amacı, sınıfı, kullanım koşulları, kişisel hijyen amaçlı, tek kullanımlık);
 - saklama koşulları;
 - ürün bileşimi (malzeme)
 - son kullanma tarihi;
 - steril olmama ve toksik olmama hakkında bilgi (yetişkin bezleri (pantolon) LIVDRY® için);
 - üretim tarihi ve parti numarasının ambalaj üzerindeki yeri ve bilgisi;
 - ambalaj içindeki miktar;
 - ayakta kullanım talimatları (LIVDRY® yetişkin bezleri için);
 - sırtüstü pozisyonda kullanım talimatları (LIVDRY® yetişkin bezleri için);
 - kullanım talimatları (yetişkin bezleri (pantolon) LIVDRY® için);
 - uyarıların listesi;
 - GOST R 55082-2012, GOST R 57889-2021 standartlarına uygunluğun belirtilmesi;
 - barkod;
 - bilgi görselleri-semboller "süper emici", "alerjiye neden olmaz", "koruyucu bariyerler", "nem göstergesi";
 - bilgi görselleri-semboller "beden", "bel çevresi aralığı", "adet sayısı";
 - "Erkekler ve kadınlar için geçerlidir" sembolü (yetişkin bezleri (külot) LIVDRY® için);
 - damla görüntüleri şeklinde emicilik derecesi;
 - burayı açın;
 - "kullanım talimatlarına bakın" sembolü;
 - A vrupa gerekliliklerine uygunluk sembolü;
 - "Tekrar uygulama yasağı" sembolü;
 - manipülasyon sembolleri "Nemden uzak tutun", "Güneş ışığı rengine maruz bırakmayın", "Sıcaklık sınırı";
 - "Çöp kutusuna atın", "Kanalizasyon sistemine atma yasağı" sembolleri;
 - Ambalajın üretim malzemesi üzerindeki sembol "Düşük yoğunluklu (yüksek basınçlı) polietilen";
 - Üreticinin Rusya Fedcrasyonu topraklarındaki yetkili temsilcisi ve iletişim bilgileri hakkında bilgi.
 - kullanım talimatlarına referans
- Düşük yoğunluklu (yüksek basınçlı) polietilen basılmıştır (bkz. Şekil 4):
- üretim tarihi;
 - parti (lot) numarası
 - son kullanma tarihi.


№ 24878

PRD: 09/06/2023 17:34:43 EXP: 09/06/2027 D3
LOT: 10 LM 1190 (161)

Şekil 4: Tüketici grup ambalajları üzerine üretim tarihi, parti numarası ve son kullanma tarihi koyma örneği

Тасарим варианты как пример для упаковки потребителей:


1. LIVDRY® yetişkin bezleri, bedenler: M, L - 10 adet/paket.

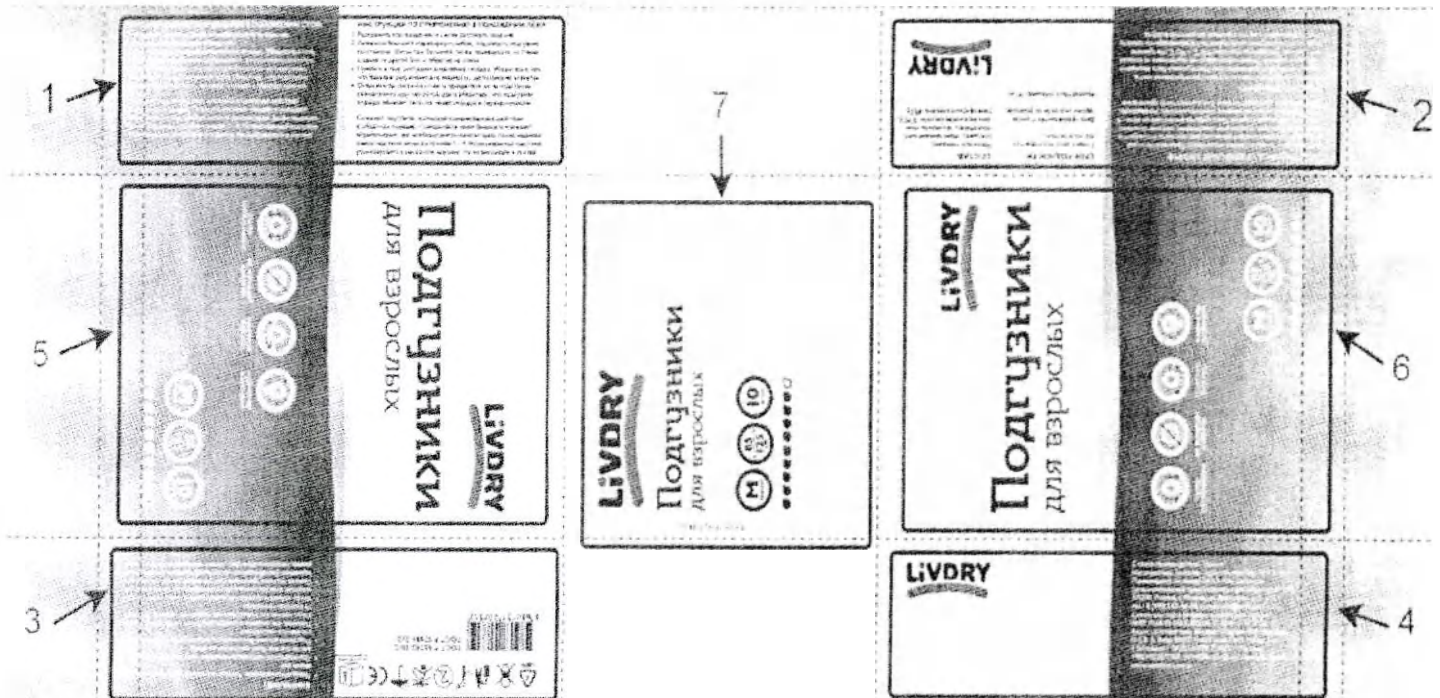

Түтeticici амбалажынын дүзени:

LIVDRY® yetişkin bezleri, beden: M - 10 adet/paket.


Şekil 1.

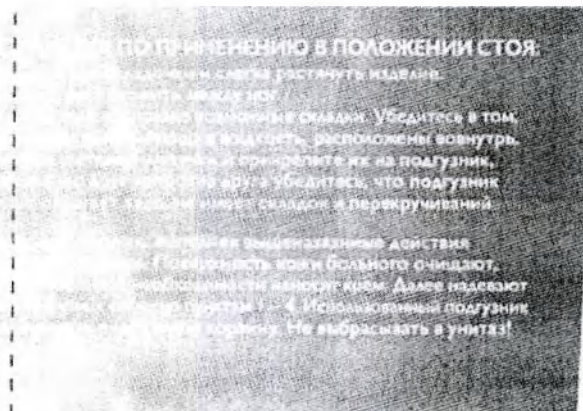

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА:

1. Разправить все складочки и слегка растянуть изделие
2. Лежачего больного перевернуть набок, подложить подгузник со стороны спины под больного, затем перевернуть на спину, а далее на другой бок и обратно на спину
3. Прижать к телу, расправив возможные складки. Убедитесь в том, что барьеры удерживающие жидкость, расположены вовнутрь
4. Откройте застежки-липучки и прикрепите их на подгузник, симметрично друг напротив друга убедитесь, что подгузник хорошо облегал тело, не имеет складок и перекручиваний.

Снимают подгузник, выполняя вышеописанные действия в обратном порядке. Поверхность кожи больного очищают, обрабатывают, при необходимости наносят крем. Далее надевают новый подгузник согласно пунктам 1 - 4. Использованный подгузник утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

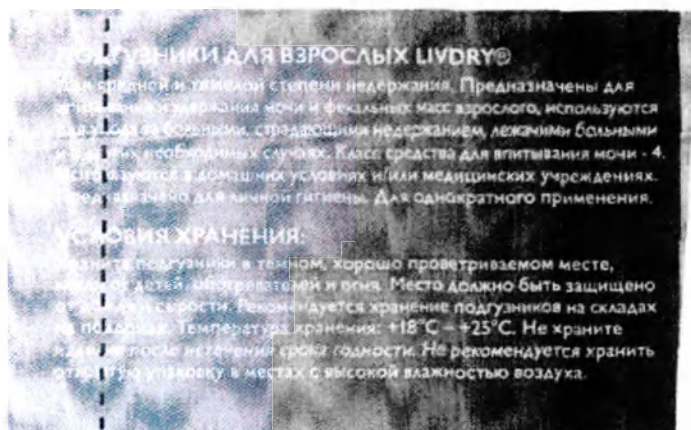

Şekil 2.

СРОК ГОДНОСТИ:

4 года с даты производства (см. на упаковке).

Дата производства и номер партии смотрите на упаковке.

Количество в упаковке: 10 шт.

СОСТАВ:

Нетканый материал, спандекс, термопластичный клей, полиэтилен, целлюлоза, соль полиакриловой кислоты (САП), полиэфирное волокно (PET).

LIVDRY

Şekil 3.



ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием бонусных липких лент убедитесь в чистоте ваших рук.
- При повторном использовании липких лент не касайтесь их ни в том месте, где они были приклеены до этого.
- Подгузник должен быть заменен, когда индикатор запаха перестает становиться незаметным.
- Помните, что надевать и снимать подгузник необходимо правильно, так как это предотвращает случайный перенос бактерий со стороны кишечника.
- Чтобы избежать протекания подгузников, следует четко следовать всем рекомендациям производителя и лечащего врача.
- Самыми частыми причинами протекания являются: ошибки при надевании (несоблюдение инструкции), неверно подобранного размера, неправильный выбор степени впитываемости подгузника.

Şekil 4.

LIVDRY

Страна производитель: Турция
Изготовитель: Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.
Произведено по заказу ООО «ОВ Лимитед»
(уполномоченный представитель производителя в РФ)
115280, Россия, г. Москва, ул. Восточная, д.11, к.1,
тел.: 8 (499) 643-44-90, e-mail: info@ov-limited.com
Свидетельство о государственной регистрации
№BY.70.06.01.012.E.003305.12.23 от 21.12.2023
Адрес изготовителя: Baspinar Organize Osk Mahallesi
O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No: 9 Ic Kapı No:
1 Sehitkamil / GAZİANTEP, TURKEY (Турция)
+90(342)3375700, 4444150; info@sevinclersaglik.com.tr
www.sevincler.com.tr

Регистрационное Удостоверение № _____ от _____



LIVDRY

Подгузники для взрослых




Şekil 7.

LIVDRY

Подгузники для взрослых



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

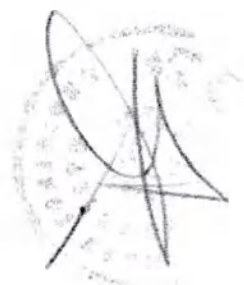


Түкетісі амбалажын дүзін:
LIVDRY® yetiſkin bezleri, beden: L - 10 adet/paket.


№ 248 78



Şekil 1.

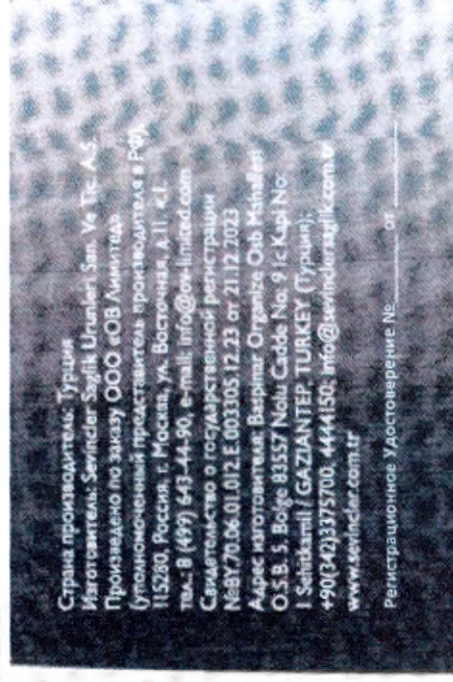


Şekil 2.

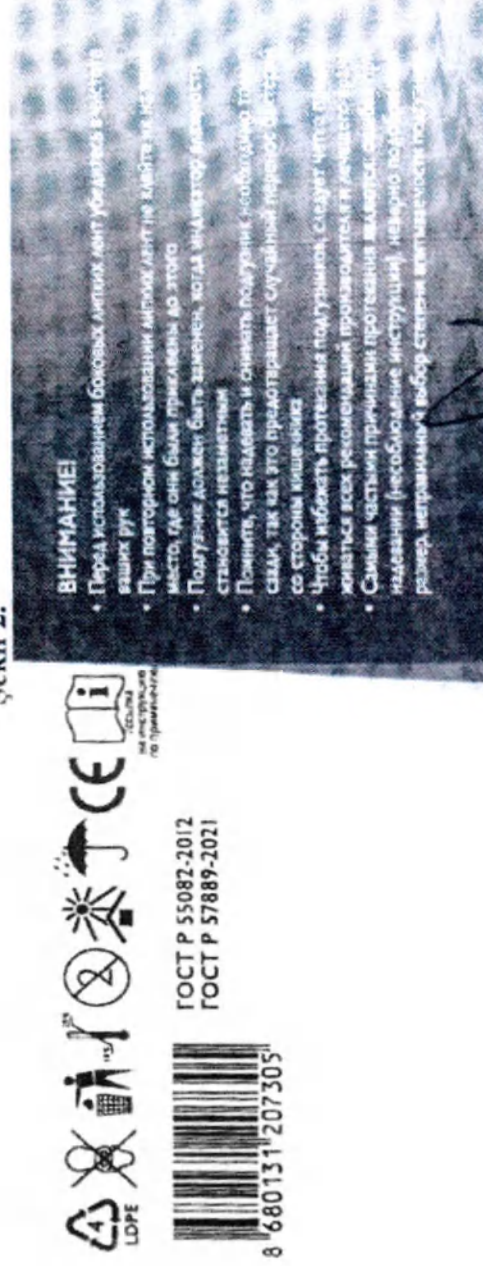

Şekil 3.

№ 248 78

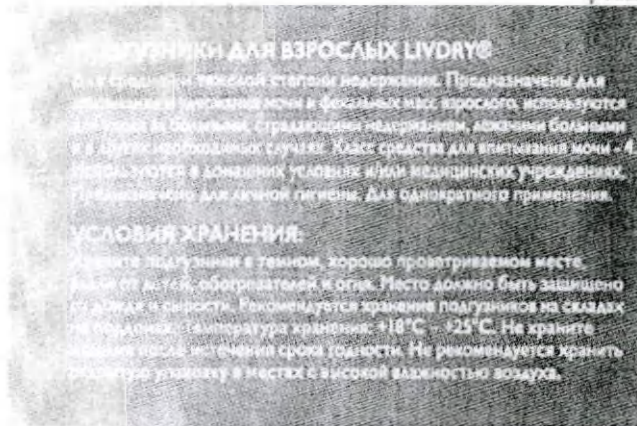**СРОК ГОДНОСТИ:**

4 года с даты производства (см. на упаковке).

СОСТАВ:


Нетканый материал, спандекс, термопластичный клей, полиэтилен, целлюлоза, соль полиакриловой кислоты (САП), полиэфирное волокно (PET).

Дата производства и номер партии смотрите на упаковке.

Количество в упаковке: 10 шт.


LIVDRY

Şekil 4.

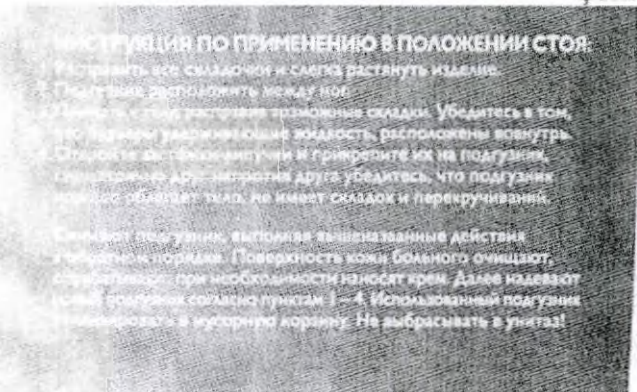**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА:**

1. Расправить все складочки и слегка растянуть изделие.
2. Лежащего больного перевернуть набок, подложить подгузник со стороны спины под больного, затем перевернуть на спину, а далее на другой бок и обратно на спину.
3. Прижать к телу, расправив возможные складки. Убедитесь в том, что барьеры удерживающие жидкость, расположены внутри.
4. Откройте застегивающие элементы и прикрепите их на подгузник, симметрично друг напротив друга. Убедитесь, что подгузник хорошо облегает тело, не имеет складок и перегибов.

Снимают подгузник, выполняя вышеуказанные действия в обратном порядке. Поверхность кожи больного очищают, обрабатывают, при необходимости наносят крем. Далее надевают новый подгузник согласно пунктам 1 - 4. Использованный подгузник утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

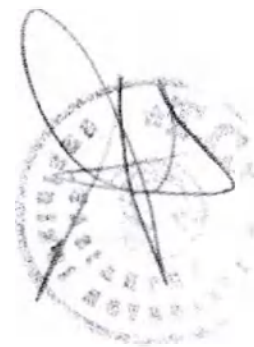

.12-09-2024

Şekil 5. ve Şekil 6. (aynı)

№ 248 78

LIVDRY

Подгузники для взрослых



Şekil 7.

LIVDRY

Подгузники для взрослых



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

12-09-2024



2. LIVDRY® yetişkin bezleri, bedenler: M, L - 30 adet/paket.

№ 248 78





Tüketici ambalajı düzeni:
LIVDRY® yetişkin bezleri, bedenler: M- 30 adet/paket.

Şekil 1.



Şekil 2.

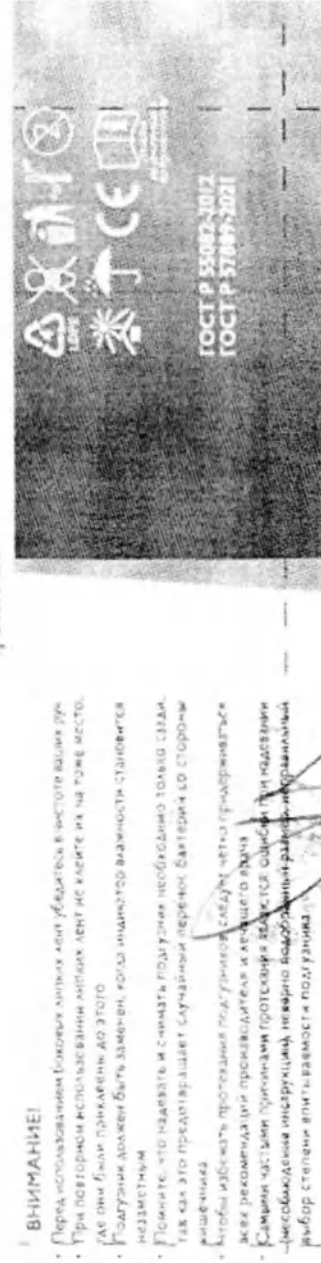

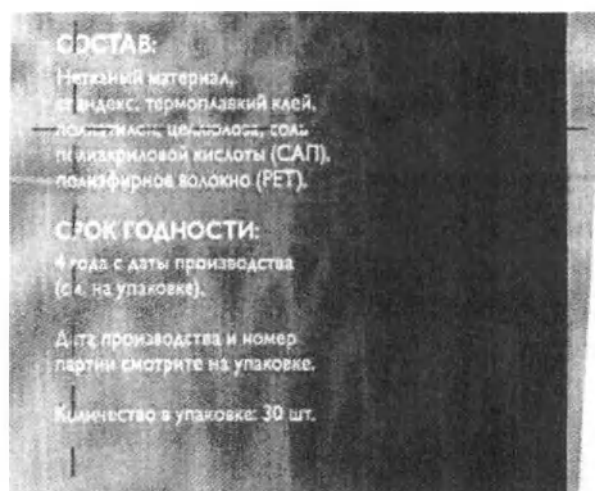

Şekil 3.

№ 24878


Страна производитель: Турция, Изготовитель: Sevincler Saglik Urunleri
San. Ve Tic. A.S. Произведено по заказу ООО «ОВ Лимитед»
(уполномоченный представитель производителя в РФ), 115280,
Россия, г. Москва, ул. Восточная, д. 11, к. 1, тел: 8 (499) 643-44-90,
e-mail: info@ov-limited.com. Свидетельство о государственной
регистрации №BY.70.06.01.012 E.003305 12.23 от 21.12.2023
Адрес изготовителя: Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge
83557 Nolu Cadde No: 9 Ic Kapi No: 1 Sehitkamil / GAZIANTEP, TURKEY
(Турция); +90(342)3375700, 4444150; info@sevincilersaglik.com.tr;
www.sevinciler.com.tr



LIVDRY

Регистрационное Удостоверение № _____ от _____

Şekil 4.

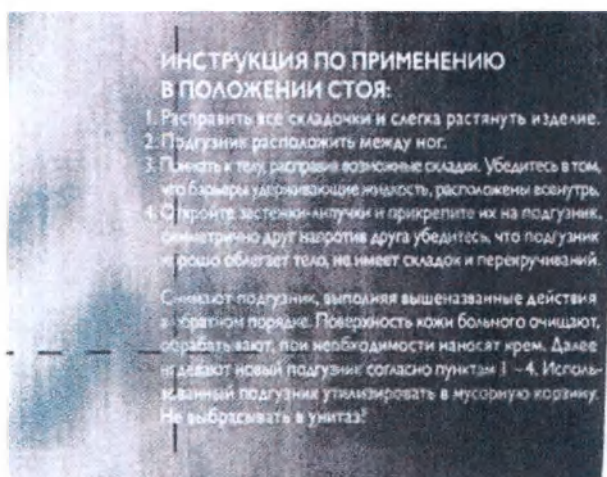

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА:

1. Расправить все складочки и слегка растянуть изделие.
2. Лежащего больного перевернуть набок, подложить подгузник со стороны спины под больного, затем перевернуть на спину, а далее на другой бок и обратно на спину.
3. Прижать к телу, расправив возможные складки. Убедиться в том, что барьеры удерживающие жидкость, расположены вовнутрь.
4. Откройте застежки-липучки и прикрепите их на подгузник, симметрично друг напротив друга убедитесь, что подгузник хорошо облегает тело, не имеет складок и перекручиваний.

Снимают подгузник, выполняя вышеперечисленные действия в обратном порядке. Поверхность кожи больного очищают, обрабатывают, при необходимости наносят крем. Далее надевают новый подгузник согласно пунктам 1 - 4. Использованный подгузник утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

Şekil 5. ve Şekil 6. (aynı)

LIVDRY

Подгузники

для взрослых



№ 24878

Şekil 7.



Подгузники
для взрослых



РАЗМЕР

85 → 125 см

30 штук



Tüketici ambalajının düzeni:
LIVDRY® yetişkin bezleri, beden: L - 30 adet/paket

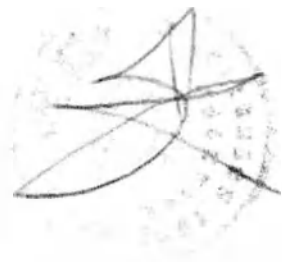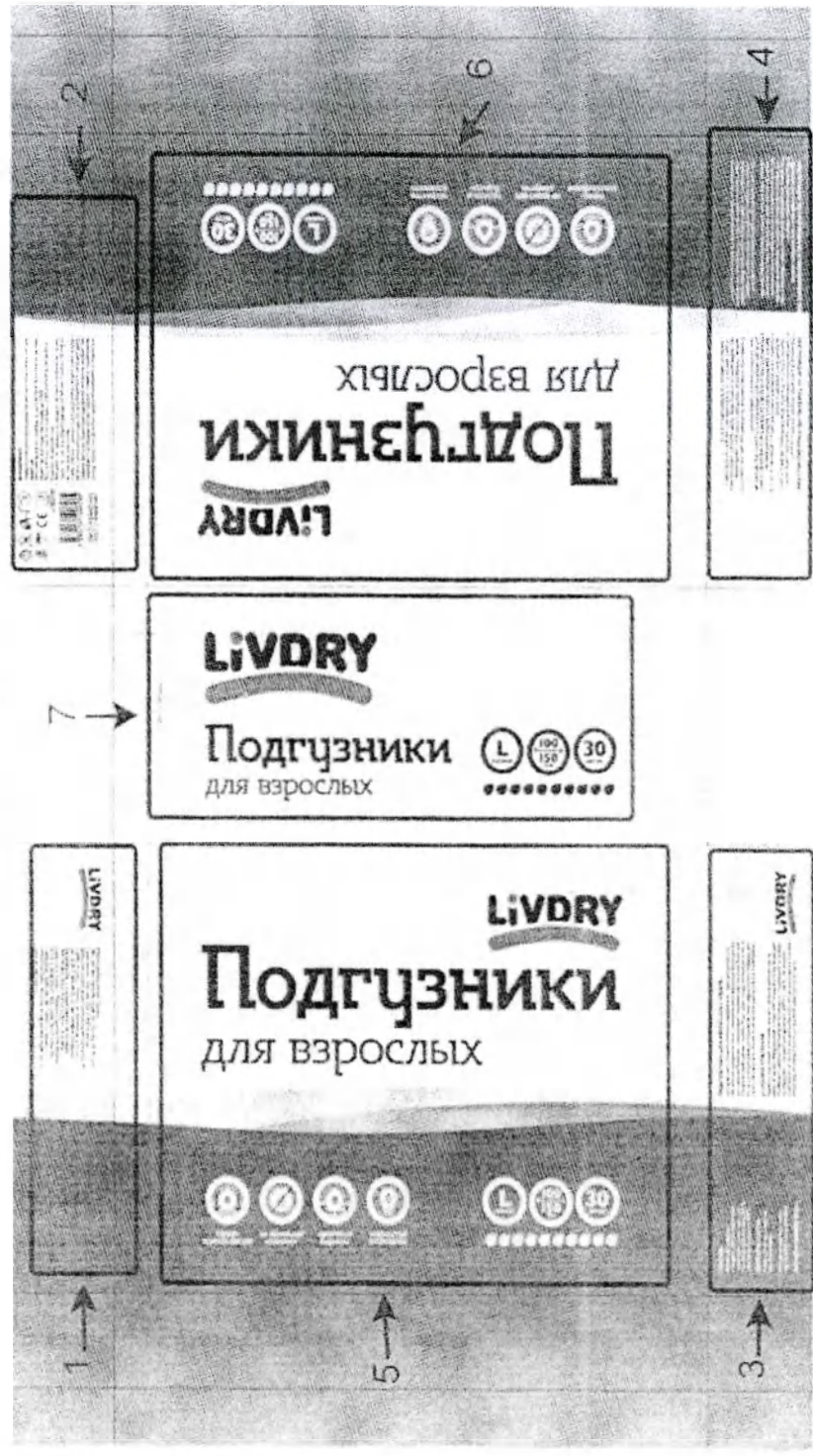

№ 24878

LIVDRY

Şekil 1.

Страна производитель: Турция
Изготовитель: Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.
Произведено по заказу ООО «ОВ Лимитед»
(уполномоченный представитель производителя в РФ).
115280, Россия, г. Москва, ул. Восточная, д.11, к.1,
тел.: 8 (499) 643-44-90, e-mail: info@ov-limited.com
Свидетельство о государственной регистрации
№BY.70.06.01.012.E.003305.12.23 от 21.12.2023
Адрес изготовителя: Baspinar Organize Osb Mahallesi
O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No: 9 Ic Kapi No:
I Sehitkamil / GAZIANTEP, TURKEY (Турция);
+90(342)3375700, 4444150; info@sevinclersaglik.com.tr
www.sevincler.com.tr

Регистрационное Удостоверение № _____ от _____

Şekil 2.



ГОСТ Р 55082-2012
ГОСТ Р 57889-2021

ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием боковых липких лент убедитесь в чистоте ваших рук
- При повторном использовании липких лент не клеите их на то же место, где они были приклеены до этого
- Подгузник должен быть заменен, когда индикатор влажности становится незаметным
- Помните, что надевать и снимать подгузник необходимо только сзади, так как это предотвращает случайный перенос бактерий со стороны кишечника
- Чтобы избежать протекания подгузников, следует четко придерживаться всех рекомендаций производителя и лечащего врача
- Самыми частыми причинами протекания являются: ошибки при надевании (несоблюдение инструкции), неверно подобранный размер, неправильный выбор степени впитываемости подгузника.

Şekil 3.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ LIVDRY®

Для средней и тяжелой степени недержания. Предназначены для впитывания и удержания мочи и фекальных масс взрослого, используются для ухода за больными, страдающими недержанием, лежачими больными и в других необходимых случаях. Класс средства для впитывания мочи - 4. Используются в домашних условиях и/или медицинских учреждениях. Предназначено для личной гигиены. Для однократного применения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости. Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха.

СОСТАВ:

Нетканый материал,
стандартный чернильный клей,
полиэтилен, целлюлоза, соевая
полиакриловая кислота (САП),
полиэфирное волокно (PET).

СРОК ГОДНОСТИ:

4 года с даты производства
(см. на упаковке).

Дата производства и номер
партии смотрите на упаковке.

Количество в упаковке: 30 шт.

LIVDRY



№ 248 7.8

Şekil 4.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ

1. Расправить все складочки и слегка растянуть изделие.
2. Подгузник расположить между ног.
3. Прижать к телу, расправив возможные складки. Убедиться в том, что барьеры застежки-липучки жидкость, расположенные внутри.
4. Откройте застежки-липучки и прикрепите их на подгузник, симметрично друг на друга. Убедитесь, что подгузник хорошо облепает тело, не имеет складок и перекручиваний.

Снимают подгузник, выполнив вышеописанные действия в обратном порядке. Поверхность кожи большого ошмидца, обрабатываемого, при необходимости наносит крем. Далее надевают новый подгузник согласно пунктам 1 – 4. Использованный подгузник утилизируют в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА:


1. Расправить все складочки и слегка растянуть изделие.
2. Лежащего больного перевернуть набок, подложить подгузник со стороны спины под боковой, затем перевернуть на спину, а далее на другой бок и обратно на спину.
3. Прижать к телу, расправив возможные складки. Убедиться в том, что барьеры застежки-липучки жидкость, расположенные внутри.
4. Откройте застежки-липучки и прикрепите их на подгузник, симметрично друг на друга. Убедитесь, что подгузник хорошо облепает тело, не имеет складок и перекручиваний.

Снимают подгузник, выполнив вышеописанные действия в обратном порядке. Поверхность кожи большого ошмидца, обрабатываемого, при необходимости наносит крем. Далее надевают новый подгузник согласно пунктам 1 – 4. Использованный подгузник утилизируют в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

Şekil 5. ve Şekil 6. (aynı)

LivDyRy

Подгузники для взрослых

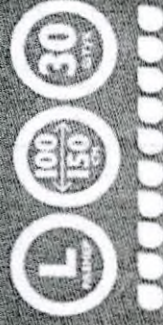


Şekil 7.

LivDyRy

Подгузники для взрослых



3. Yetişkin bezleri (külot) LIVDRY®, bedenler: M, L - 10 adet / paket.

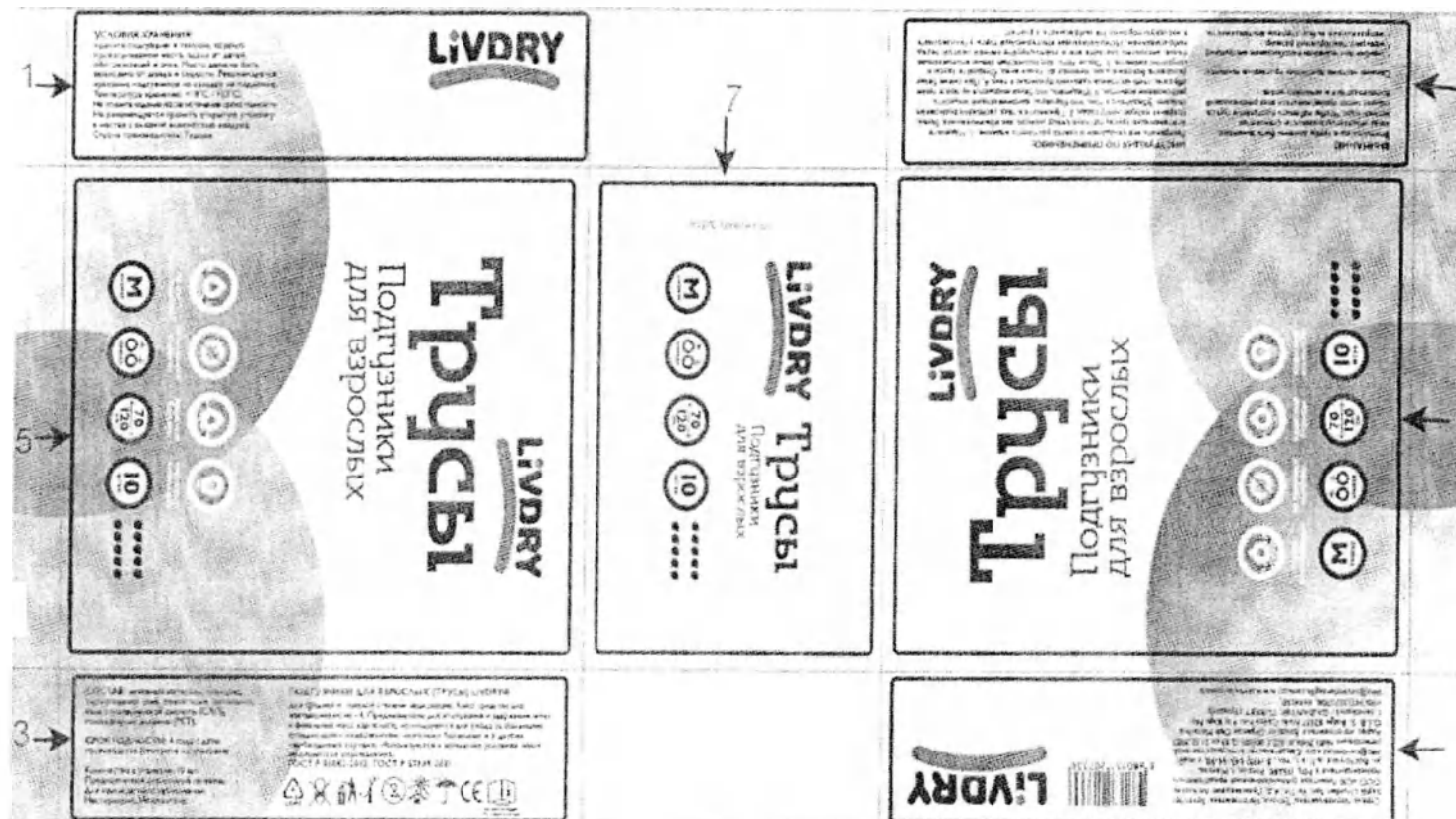

Тüketici ambalajının düzeni:

LIVDRY® yetişkin bezleri (külot), beden: M - 10 adet/paket.

Şekil 1.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости. Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха. Страна производитель: Турция.

LIVDRY

Şekil 2.

ВНИМАНИЕ!

Впитывающие трусы должны быть заменены, когда индикатор влажности становится незаметным. Чтобы избежать протекания трусов, следует четко придерживаться всех рекомендаций производителя и лечащего врача.

Самыми частыми причинами протекания являются:

- ошибки при надевании (несоблюдение инструкции);
- неверно подобранный размер;
- неправильный выбор степени впитываемости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Расправить все складочки и слегка растянуть изделие. 1. Наденьте впитывающие трусы, потянув снизу вверх, как обыкновенное белье, сохраняя липкую ленту сзади. 2. Прижмите к телу, расправив возможные складки. Убедитесь в том, что барьеры, удерживающие жидкость, расположены вовнутрь. 3. Убедитесь, что белье находится на месте таким образом, чтоб ластовица идеально прилежала к телу. 4. При смене белья разорвите боковые швы, начиная от талии вниз. Откройте трусы и аккуратно снимите. 5. После того, как полностью сняли впитывающее белье, аккуратно скатайте его и зафиксируйте липкой лентой перед выбрасыванием. Использованные впитывающие трусы утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

Şekil 3.

№ 248 78

СОСТАВ: нетканый материал, спандекс, термоплавкий клей, полиэтилен, целлюлоза, соль полиакриловой кислоты (САП), полиэфирное волокно (РЕТ).

СРОК ГОДНОСТИ: 4 года с даты производства (смотрите на упаковке)

Количество в упаковке: 10 шт.
Предназначено для личной гигиены.
Для однократного применения.
Нестерильно. Нетоксично.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ТРУСЫ) LIVDRY®

Для средней и тяжелой степени недержания. Класс средства для впитывания мочи - 4. Предназначены для впитывания и удержания мочи и фекальных масс взрослого, используются для ухода за больными, страдающими недержанием, лежачими больными и в других необходимых случаях. Используются в домашних условиях и/или медицинских учреждениях.

ГОСТ Р 55082-2012, ГОСТ Р 57889-2021



Şekil 4.

Страна производитель: Турция, Изготовитель: Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S. Произведено по заказу ООО «ОВ Лимитед» (уполномоченный представитель производителя в РФ), 115280, Россия, г. Москва, ул. Восточная, д.11. к.1, тел.: 8 (499) 643-44-90, e-mail: info@ov-limited.com. Свидетельство о государственной регистрации №BY.70.06.01.012.E.003305.12.23 от 21.12.2023. Адрес изготовителя: Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No: 9 Ic Kapi No: 1 Sehirkamil / GAZIANTER, TURKEY (Турция); +90(342)3375700, 4444150; info@sevinclersaglik.com.tr; www.sevincler.com.tr



LIVDRY

Регистрационное Удостоверение № _____ от _____



12-09-2024




Şekil 7.

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



№ 248 78

Түкетici амбалажинн дүзени:
LIVDRY® yetiřkin bezleri (külot), beden: L - 10 adet/paket.

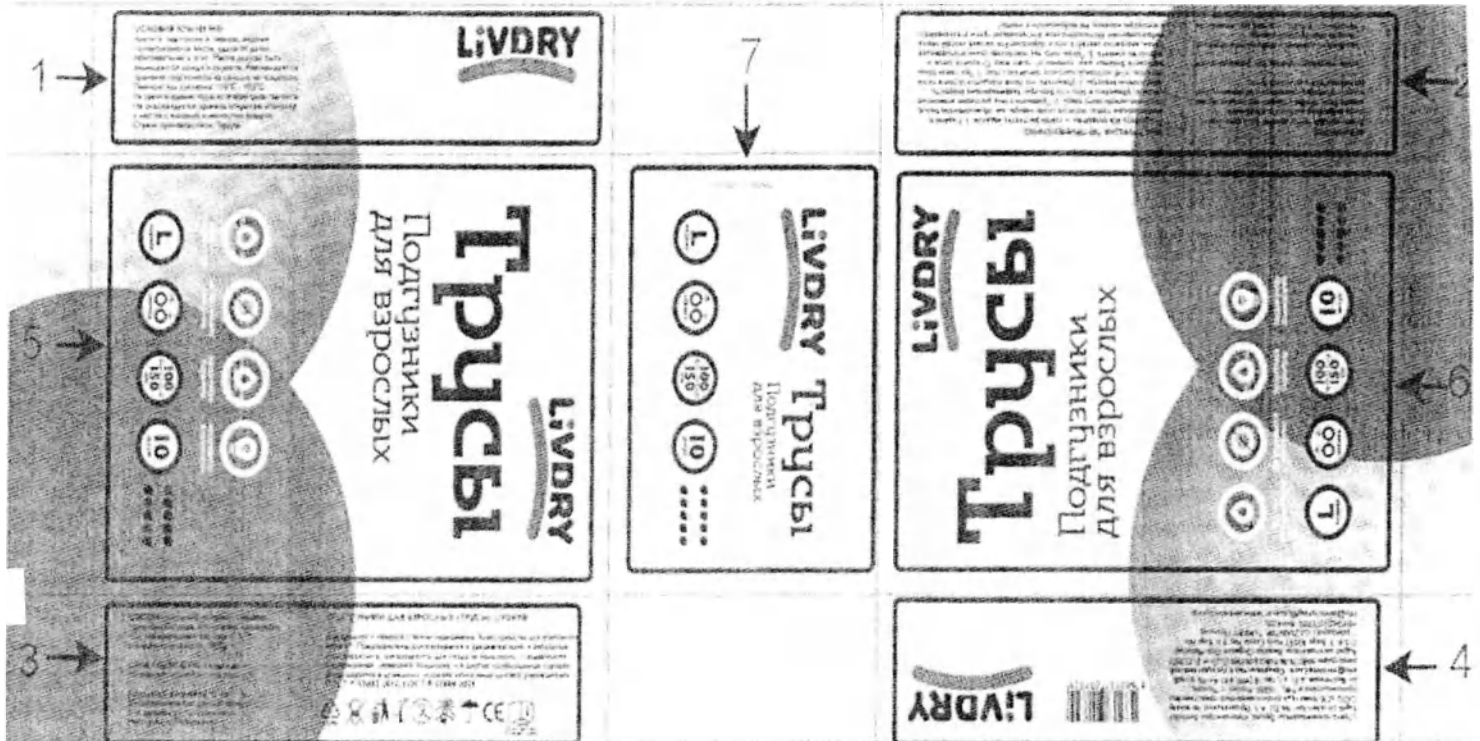

Түкетici амбалажинн дүзени:
LIVDRY® yetiřkin bezleri (külot), beden: L - 10 adet/paket
Şekil 1.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости. Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха. Страна производителя: Турция.

LIVDRY

Şekil 2.

ВНИМАНИЕ!
Впитывающие трусы должны быть заменены, когда индикатор влажности становится незаметным. Чтобы избежать протекания трусов, следует строго придерживаться всех рекомендаций производителя и лечащего врача.

Самыми частыми причинами протекания являются:


- ошибочный подбор размера (необходимо следовать инструкции);
- неверно подобранный размер;
- неправильный выбор степени впитываемости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Расправить все складочки и слегка растянуть изделие. 1. Наденьте впитывающие трусы, потянув снизу вверх, как обыкновенное белье, сохраняя липкую ленту сзади. 2. Прижмите к телу, расправив возможные складки. Убедитесь в том, что барьеры, удерживающие жидкость, расположены вовнутрь. 3. Убедитесь, что белье находится на поясе таким образом, чтоб ластовица идеально прилежала к телу. 4. При смене белья разорвите боковые швы, начиная от талии вниз. Откройте трусы и аккуратно снимите. 5. После того, как полностью сняли впитывающее белье, аккуратно скатайте его и зафиксируйте липкой лентой перед выбрасыванием. Использованные впитывающие трусы утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

Şekil 3.

№ 248 78

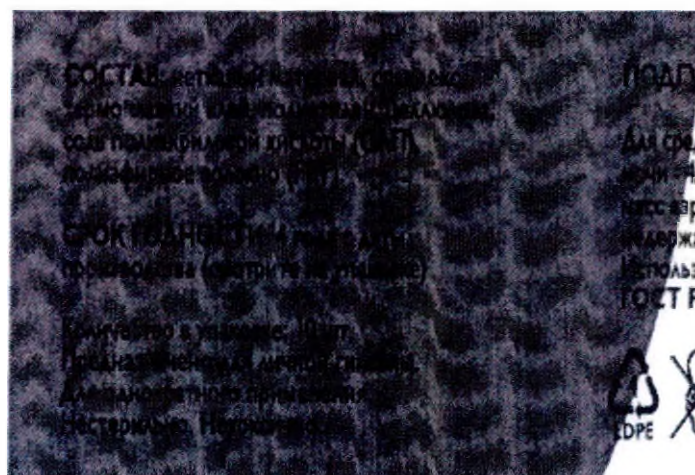

Şekil 4.

Страна производитель: Турция, Изготовитель: Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S. Произведено по заказу ООО «ОВ Лимитед» (уполномоченный представитель производителя в РФ), 115280, Россия, г. Москва, ул. Восточная, д.11, к.1, тел.: 8 (499) 643-44-90, e-mail: info@ov-limited.com. Свидательство о государственной регистрации №BY.70.06.01.012.E.003305.12.23 от 21.12.2023 Адрес изготовителя: Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. S. Bolge 83557 Nolu Cadde No: 9 Ic Kapi No: 1 Sehitkamil / GAZIANTEP, TURKEY (Турция); +90(342)3375700, 4444150; info@sevinclersaglik.com.tr; www.sevincler.com.tr



LIVEDRY


Регистрационное Удостоверение № _____ от _____



LIVDRY

Трусы

Подгузники
для взрослых

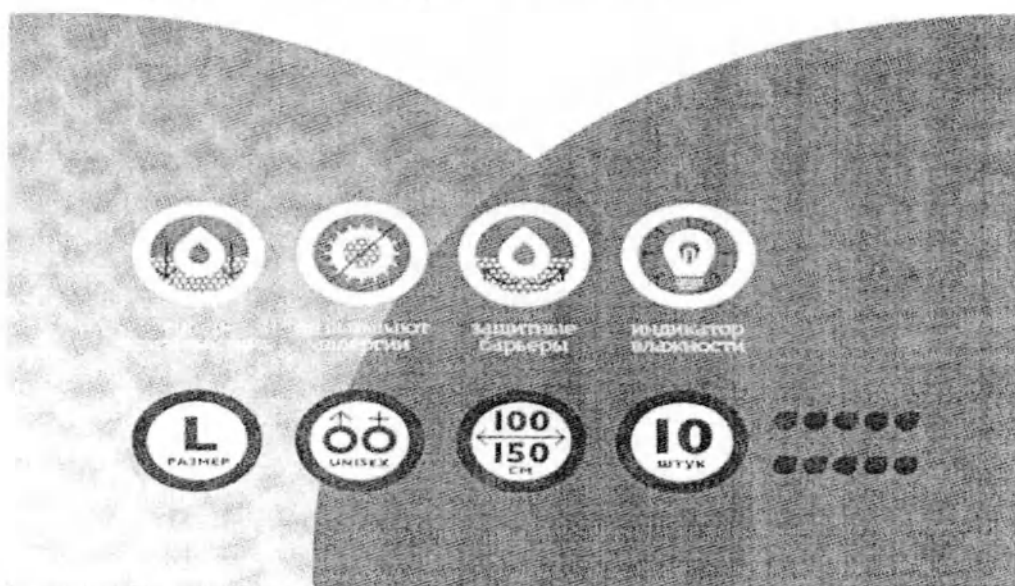

Şekil 7.

LIVDRY


Трусы

Подгузники
для взрослых

открытый доступ



4. Yetişkin bezleri (külot) LIVDRY®, bedenler: M, L - 30 adet/paket.

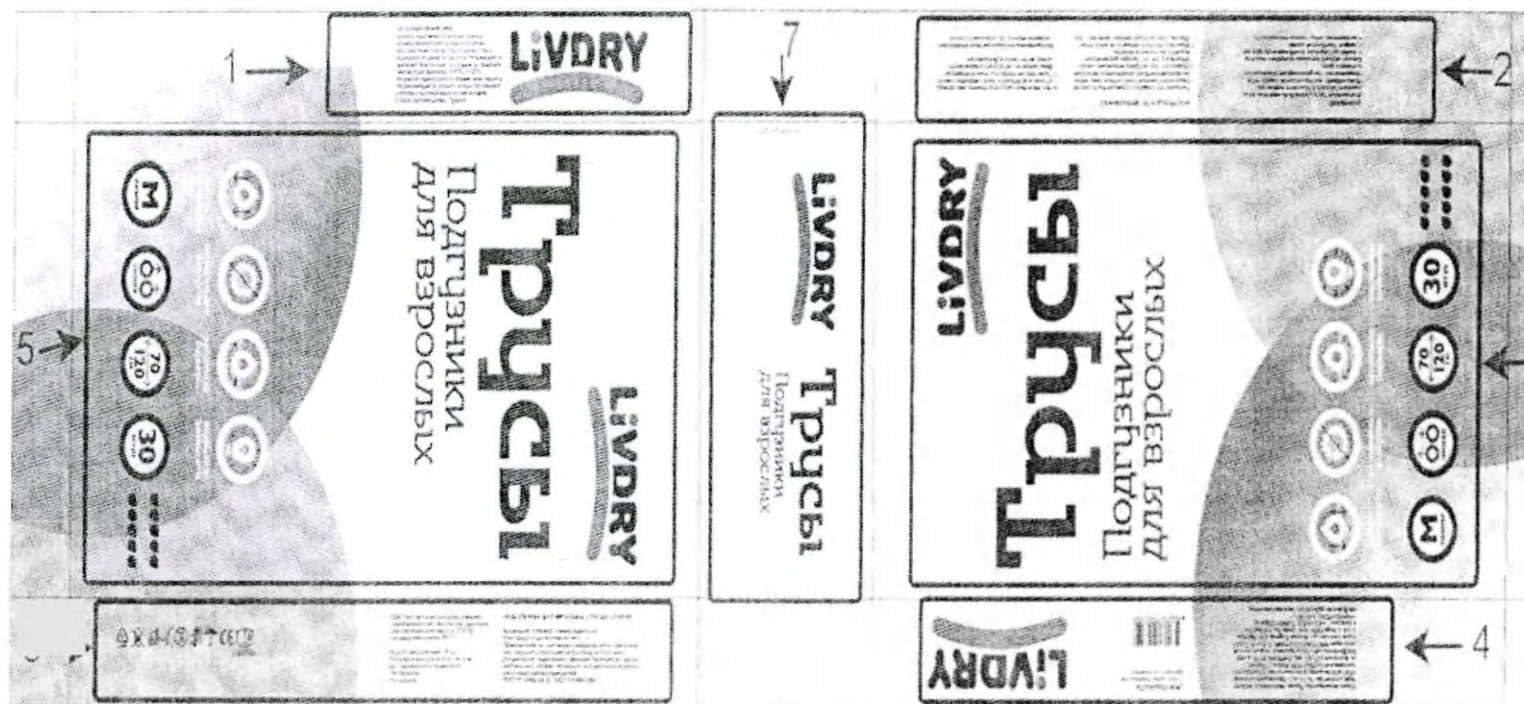

Tüketici ambalajının düzeni:
LIVDRY® yetişkin bezleri (külot), beden: M - 30 adet/paket

Şekil 1.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости. Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха. Страна производитель: Турция



Şekil 2.

ВНИМАНИЕ!

Впитывающие трусы должны быть заменены, когда индикатор влажности становится незаметным.

Чтобы избежать протекания трусов, следует четко придерживаться всех рекомендаций производителя и лечащего врача.

Самыми частыми причинами протекания являются:

- ошибки при надевании (несоблюдение инструкции);
- неверно подобранный размер;
- неправильный выбор степени впитываемости.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- Расправить все складочки и слегка растянуть изделие
1. Наденьте впитывающие трусы, потянув снизу вверх, как обыкновенное белье, сохраняя липкую ленту сзади
 2. Прижмите к телу, расправив возможные складки. Убедитесь в том, что барьеры, удерживающие жидкость, расположены вовнутрь.
 3. Убедитесь, что белье находится на поясе таким образом, чтоб ластовица идеально прилегла к телу.

4. При смене белья разорвите боковые швы, начиная от талии вниз. Откройте трусы и аккуратно снимите.
5. После того, как полностью сняли впитывающее белье, аккуратно скатайте его и зафиксируйте липкой лентой перед выбрасыванием.

Использованные впитывающие трусы утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

Şekil 3.

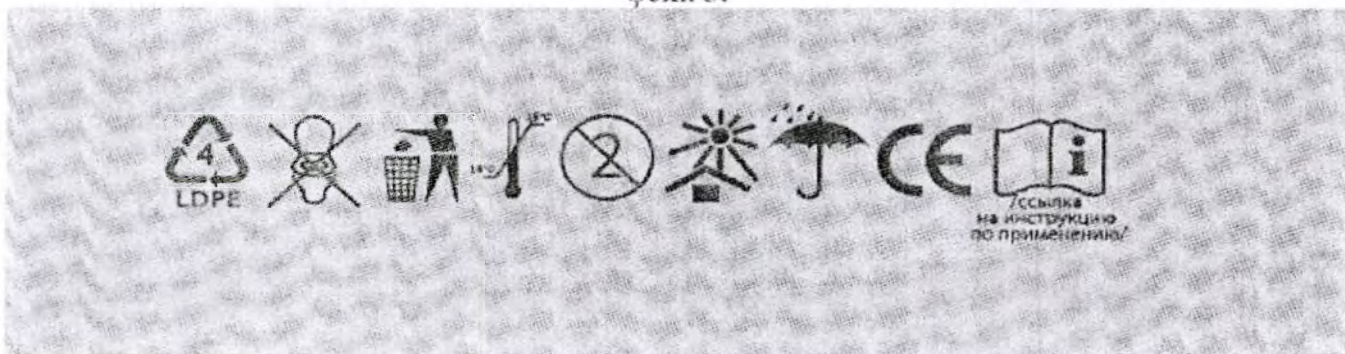

СОСТАВ: нетканый материал, спандекс, термоплавкий клей, полиэтилен, целлюлоза, соль полиакриловой кислоты (САП), полиэфирное волокно (PET).


Количество в упаковке: 30 шт.
Предназначено для личной гигиены
Для однократного применения
Нестерильно
Нетоксично

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ТРУСЫ) LIVDRY®

Для средней и тяжелой степени недержания.
Класс средства для впитывания мочи - 4.
Предназначены для впитывания и удержания мочи и фекальных масс взрослого, используются для ухода за больными, страдающими недержанием, лежачими больными и в других необходимых случаях. Используются в домашних условиях и/или медицинских учреждениях.
ГОСТ Р 55082-2012, ГОСТ Р 57889-2021

Şekil 4.

Страна производитель: Турция, Изготовитель: Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S. Произведено по заказу ООО «ОВ Лимитед» (уполномоченный представитель производителя в РФ), 115280, Россия, г. Москва, ул. Восточная, д.11, к.1, тел.: 8 (499) 643-44-90, e-mail: info@ov-limited.com. Свидетельство о государственной регистрации №BY.70.06.01.012.E.003305.12.23 от 21.12.2023
Адрес изготовителя: Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No: 9 Iç Kapi No: I Sehitkamil / GAZIANTER, TURKEY (Турция); +90(342)3375700, 4444150; info@sevinclersaglik.com.tr; www.sevincler.com.tr

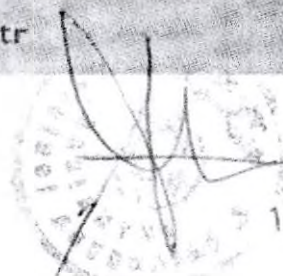

СРОК ГОДНОСТИ:
4 года с даты производства
(смотрите на упаковке)
Регистрационное Удостоверение
№ _____ от _____



LIV DRY

№ 248 78



12-09-2024

Şekil 5. ve Şekil 6. (aynı)




Şekil 7.



12-09-2024

Түкетісі амбалжымын дүзіні:
LIVDRY® yetішкін bezleri (күлот), beden: L - 30 adet/paket.

№ 248 78

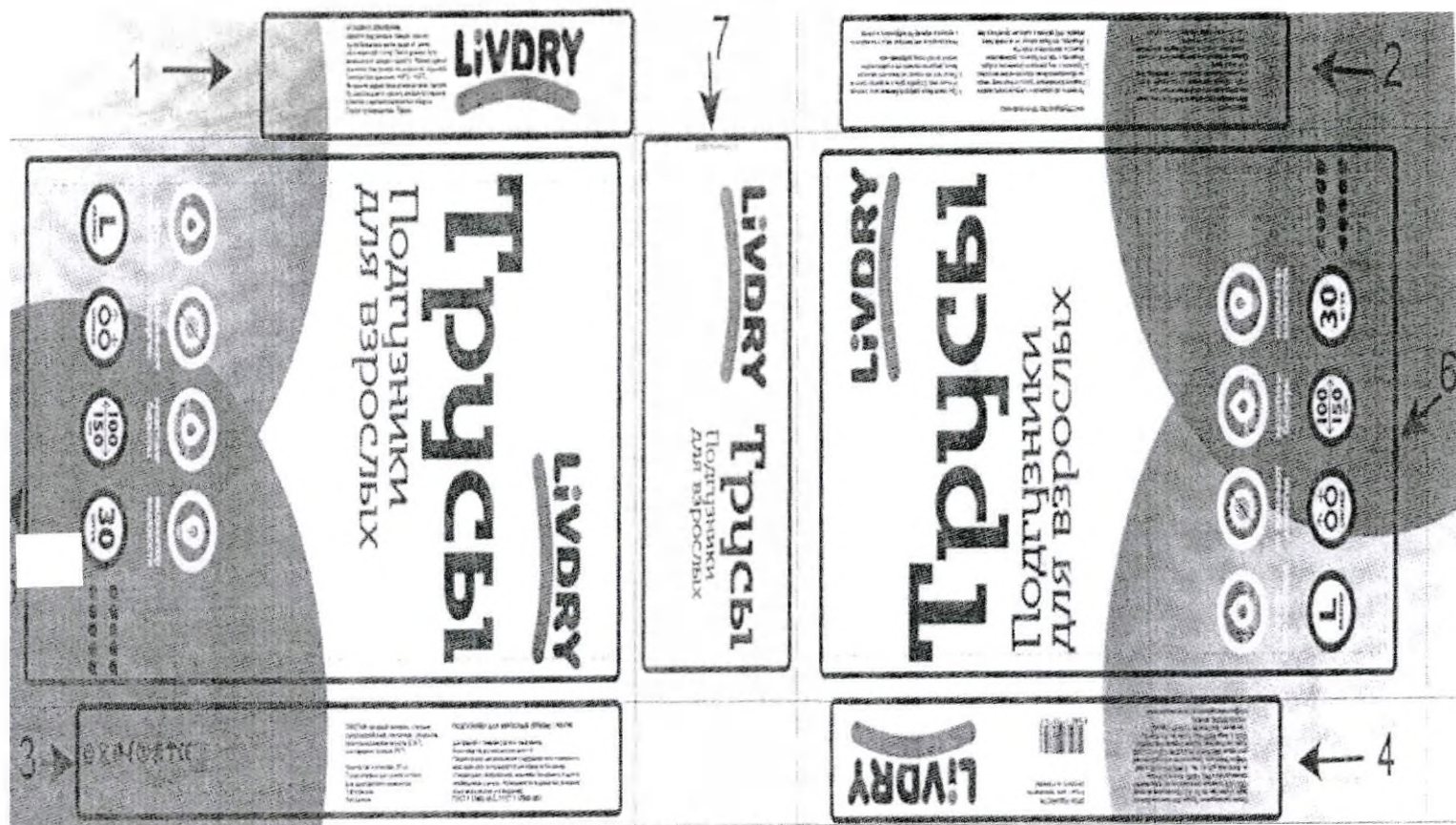


Şekil 1.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости. Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха. Страна производитель: Турция.



Şekil 2.

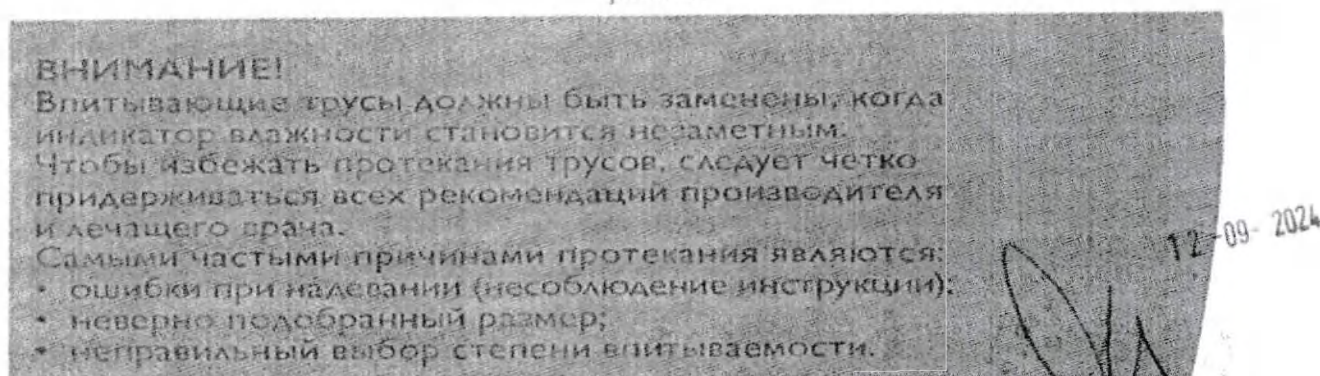


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

1. Разделите все содержимое слегка размятой модели на тонкие впитывающие трубки, погруженные насквозь как обыкновенные бусы, сохраняя их упругость и эластичность.
2. Приложите к телу, проверив, возможны ли складки. Убедитесь в том, что барьеры, удерживающие жидкости, расположены адекватно.
3. Убедитесь, что бусы находятся на тонце таким образом, что обхватывая идеально прилегают к телу.

5. После того, как полностью сняли впитывающее белье, аккуратно скатайте его и зафиксируйте липкой лентой перед выбрасыванием

Использованные питающие трусы утилизировать
в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

Şekil 3.

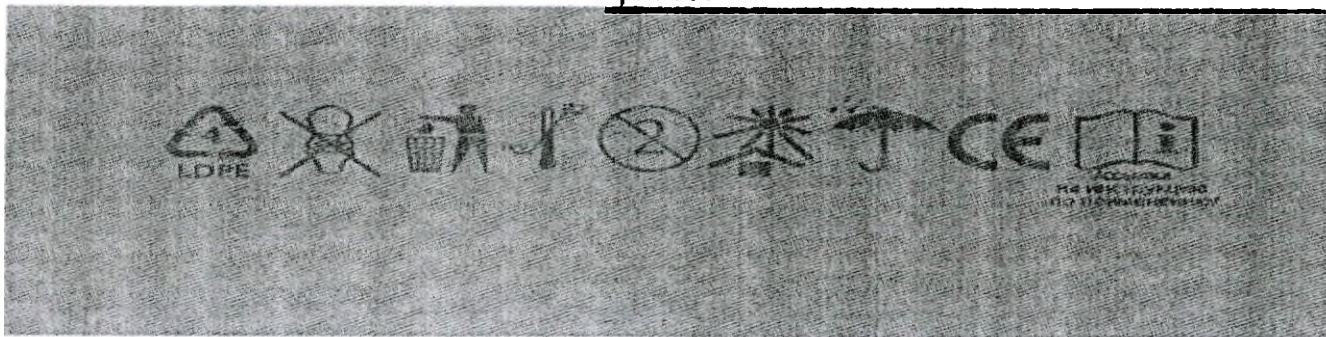

СОСТАВ: нетканый материал, спандекс, термолакированный картон, поликарбонат, полиакрилат, полипропиленовый картон (СПП), полифторидное волокно (PFT)

Количество в упаковке: 30 шт
Предназначение: для личной гигиены
Для одноразового применения
Нестерильно
Натянуто

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ТРУСЫ) LIVDRY®

Для средней и тяжелой степени недержания.
Класс средств для впитывания мочи - 4
Предназначены для впитывания и удержания мочи и фекальных масс взрослого, используются для ухода за больными, страдающими недержанием, лежачими больными и в других необходимых случаях. Используются в домашних условиях или в медицинских учреждениях.
ГОСТ Р 55082-2012, ГОСТ Р 57889-2021

Nº 248 78



17.09.2024

Şekil 4.

№ 248 78

Страна производитель: Турция, Изготовитель: Sevincler
Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S. Произведено по заказу
ООО «ОВ Лимитед» (уполномоченный представитель
производителя в РФ), 115280, Россия, г. Москва,
ул. Восточная, д.11, к.1, тел.: 8 (499) 643-44-90, e-mail:
info@ov-limited.com. Свидетельство о государственной
регистрации №BY.70.06.01.012.E.003305.12.23 от 21.12.2023
Адрес изготовителя: Baspinar Organize Osb Mahallesi
O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No: 9 Ic Kapi No:
1 Sehitkamil / GAZIANTER, TURKEY (Турция);
+90(342)3375700, 4444150;
info@sevinclersaglik.com.tr; www.sevincler.com.tr

СРОК ГОДНОСТИ:

4 года с даты производства
(смотрите на упаковке)

Регистрационное Удостоверение
№ _____ от _____



8 680131 207343

LIVDRIY



12-09-2024

LIVDRY

Трусы


Подгузники для взрослых

не вызывают
аллергиизащитные
барьерыиндикатор
влажности

РАЗМЕР



UNISEX

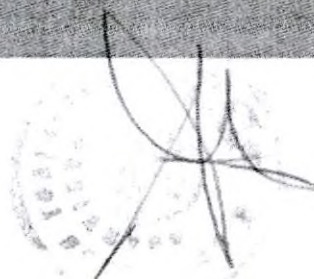100
150
CM30
ШТУК

12-09-2024

LIVDRY

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Трусы

Подгузники
для взрослых

2. Taşıma paketinin etiketlenmesi

Tıbbi cihazın taşıma ambalajının (çuval-balya) etiketinde aşağıdaki hususlar belirtilmelidir:

- tıbbi cihazın adı;
- tasarım varyantı;
- imalatçının adı ve adresi, imalatçının iletişim bilgileri;
- kayıt sertifikasının numarası ve düzenlenme tarihi;
- saklama ve taşıma koşulları;
- ambalaj içindeki miktar;
- “Kullanım talimatlarına bakın” sembolü;
- “Nemden uzak tutun”, “Güneş ışığına maruz kalmasına izin vermeyin” manipülasyon sembolleri;
- Üreticinin Rusya Federasyonu topraklarındaki yetkili temsilcisi ve iletişim bilgileri hakkında bilgi;
- üretim tarihi;
- parti numarası (lot)
- raf ömrü;
- genel boyutlar ve ağırlık;

Varyant versiyon örneğinde nakliye ambalajı düzenleri:

1. Yetişkin bezleri LIVDRY®, bedenler: M, L - 10 adet/paket.

M beden için düzen, 10 adet/paket.

Yetişkin bezleri LIVDRY®

(_____ tarihli № _____ tescil belgesi)

I. Versiyon: Yetişkin bezleri LIVDRY®, beden: M - 10 adet/paket.

II. Kullanım talimatları 1 adet.

İçindeki paket sayısı: 6 paket.

Genel Boyut:

Ağırlık:

Taşıma koşulları: Taşıma temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır. Nakliye paletler üzerinde veya paletsiz olarak gerçekleştirilir. Nakliye içindeki sıcaklık -10°C ila +25°C arasında olmalıdır.

Depolama koşulları: Yetişkin bezlerini karanlık, iyi havalandırılmış bir yerde, çocuklardan, ısıtıcılardan ve ateşten uzakta saklayın. Bu yer yağmur ve nemden korunmalıdır. Yetişkin bezlerinin depolarda paletler üzerinde saklanması tavsiye edilir. Depolama sıcaklığı: +18°C - +25°C. Ürünü son kullanma tarihinden sonra depolamayınız. Açılmış ambalajın yüksek hava nemi olan yerlerde saklanması tavsiye edilmez.



№ 248 78

Üretici (İmalatçı): Sevinçler Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş., Başpınar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bölge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP / TURKEY (Türkiye); Tel: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.

Üreticinin yetkili temsilcisi: Limited Liability Company "OV Limited" (OV Limited LLC), 11, bina 1, Vostochnaya Street, 11, bina 1, Moscow, 115280; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com.

Üretim tarihi:
Parti numarası (lot):
Raf ömrü:



L beden için düzen, 10 adet/paket.

Yetişkin bezleri LIVDRY®

(_____ tarihli №_____ tescil belgesi)

I.Versiyon: Yetişkin bezleri LIVDRY®, beden: L - 10 adet/paket. II. Kullanım talimatları 1 adet.
İçindeki paket sayısı: 6 paket.



Genel Boyut:

Ağırlık:

Taşıma koşulları: Taşıma temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır. Nakliye paletler üzerinde veya paletsiz olarak gerçekleştirilir. Nakliye içindeki sıcaklık -10°C ila +25°C arasında olmalıdır.

Depolama koşulları: Yetişkin bezlerini karanlık, iyi havalandırılmış bir yerde, çocuklardan, ısıtıcılardan ve ateşten uzakta saklayın. Bu yer yağmur ve nemden korunmalıdır. Yetişkin bezlerinin depolarda paletler üzerinde saklanması tavsiye edilir. Depolama sıcaklığı: +18°C - +25°C. Ürünü son kullanma tarihinden sonra depolamayınız. Açılmış ambalajın yüksek hava nemi olan yerlerde saklanması tavsiye edilmez.

Üretici (İmalatçı): Sevinçler Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş., Başpınar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bölge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP / TURKEY (Türkiye); Tel: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.

Üreticinin yetkili temsilcisi: Limited Liability Company "OV Limited" (OV Limited LLC), 11, bina 1, Vostochnaya Street, 11, bina 1, Moscow, 115280; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com.

Üretim tarihi:
Parti numarası (lot):
Raf ömrü:



Varyant versiyon örneğinde nakliye ambalajı düzenleri:

2. LIVDRY® yetişkin bezleri, bedenler: M, L - 30 adet/paket.

M beden için düzen, 30 adet/paket.

Yetişkin bezleri LIVDRY®

(_____ tarihli №_____ tescil belgesi)

I.Versiyon: Yetişkin bezleri LIVDRY®, beden: M - 30 adet/paket. II. Kullanım talimatları 1 adet.
İçindeki paket sayısı: 4 paket.



№24878

Genel Boyut:

Ağırlık:

Taşıma koşulları: Taşıma temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır. Nakliye paletler üzerinde veya paletsiz olarak gerçekleştirilir. Nakliye içindeki sıcaklık -10°C ila +25°C arasında olmalıdır.

Depolama koşulları: Yetişkin bezlerini karanlık, iyi havalandırılmış bir yerde, çocuklardan, ısıtıcılardan ve ateşten uzakta saklayın. Bu yer yağmur ve nemden korunmalıdır. Yetişkin bezlerinin depolarda paletler üzerinde saklanması tavsiye edilir. Depolama sıcaklığı: +18°C - +25°C. Ürünü son kullanma tarihinden sonra depolamayınız. Açılmış ambalajın yüksek hava nemi olan yerlerde saklanması tavsiye edilmez.

Üretici (imalatçı): Sevinçler Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş., Başpınar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP / TURKEY (Türkiye); Tel: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.

Üreticinin yetkili temsilcisi: Limited Liability Company "OV Limited" (OV Limited LLC), 11, bina 1, Vostochnaya Street, 11, bina 1, Moscow, 115280; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com.

Üretim tarihi:

Parti numarası (lot):

Raf ömrü:



I. beden için düzen, 30 adet/paket.

Yetişkin bezleri LIVDRY®

(_____ tarihli № _____ tescil belgesi)

I. Versiyon: Yetişkin bezleri LIVDRY®, beden: L - 30 adet/paket.

II. Kullanım talimatları 1 adet.

İçindeki paket sayısı: 4 paket.

Genel Boyut:

Ağırlık:

Taşıma koşulları: Taşıma temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır. Nakliye paletler üzerinde veya paletsiz olarak gerçekleştirilir. Nakliye içindeki sıcaklık -10°C ila +25°C arasında olmalıdır.

Depolama koşulları: Yetişkin bezlerini karanlık, iyi havalandırılmış bir yerde, çocuklardan, ısıtıcılardan ve ateşten uzakta saklayın. Bu yer yağmur ve nemden korunmalıdır. Yetişkin bezlerinin depolarda paletler üzerinde saklanması tavsiye edilir. Depolama sıcaklığı: +18°C - +25°C. Ürünü son kullanma tarihinden sonra depolamayınız. Açılmış ambalajın yüksek hava nemi olan yerlerde saklanması tavsiye edilmez.

Üretici (imalatçı): Sevinçler Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş., Başpınar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP / TURKEY (Türkiye); Tel: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.

Üreticinin yetkili temsilcisi: Limited Liability Company "OV Limited" (OV Limited LLC), 11, bina 1, Vostochnaya Street, 11, bina 1, Moscow, 115280; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com.

Üretim tarihi:

Parti numarası (lot):

Raf ömrü:



Varyant versiyon örneğinde nakliye ambalajı düzenleri:

3. Yetişkin bezleri (külot) LIVDRY®, bedenler: M, L - 10 adet/paket.

M beden için düzen, 10 adet/paket.

Yetişkin bezleri (külot) LIVDRY®

(_____ tarihli № _____ tescil belgesi)

I. Versiyon: Yetişkin bezleri (külot) LIVDRY®, beden: M - 10 adet/paket.

II. Kullanım talimatları 1 adet.

İçindeki paket sayısı: 8 paket.

Genel Boyut:

Ağırlık:

Taşıma koşulları: Taşıma temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır. Nakliye paletler üzerinde veya paletsiz olarak gerçekleştirilir. Nakliye içindeki sıcaklık -10°C ila +25°C arasında olmalıdır.

Depolama koşulları: Yetişkin bezlerini karanlık, iyi havalandırılmış bir yerde, çocuklardan, ısıtıcılardan ve ateşten uzakta saklayın. Bu yer yağmur ve nemden korunmalıdır. Yetişkin bezlerinin depolarda paletler üzerinde saklanması tavsiye edilir. Depolama sıcaklığı: +18°C - +25°C. Ürünü son kullanma tarihinden sonra depolamayınız. Açılmış ambalajın yüksek hava nemi olan yerlerde saklanması tavsiye edilmaz.



Üretici (İmalatçı): Sevinçler Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş., Başpınar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bölge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP / TURKEY (Türkiye); Tel: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.

Üreticinin yetkili temsilcisi: Limited Liability Company "OV Limited" (OV Limited LLC), 11, bina 1, Vostochnaya Street, 11, bina 1, Moscow, 115280; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com.

Üretim tarihi:

Parti numarası (lot):

Raf ömrü:



L beden için düzen, 10 adet/paket.

Yetişkin bezleri (külot) LIVDRY®

(_____ tarihli № _____ tescil belgesi)

I. Versiyon: Yetişkin bezleri (külot) LIVDRY®, beden: L - 10 adet/paket.

II. Kullanım talimatları 1 adet.

İçindeki paket sayısı: 8 paket.

Genel Boyut:

Ağırlık:

Taşıma koşulları: Taşıma temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır. Nakliye paletler üzerinde veya paletsiz olarak gerçekleştirilir. Nakliye içindeki sıcaklık -10°C ila +25°C arasında olmalıdır.

Depolama koşulları: Yetişkin bezlerini karanlık, iyi havalandırılmış bir yerde, çocuklardan, ısıtıcılardan ve ateşten uzakta saklayın. Bu yer yağmur ve nemden korunmalıdır. Yetişkin bezlerinin depolarda paletler üzerinde saklanması tavsiye edilir. Depolama sıcaklığı: +18°C - +25°C. Ürünü son kullanma tarihinden sonra depolamayınız. Açılmış ambalajın yüksek hava nemi olan yerlerde saklanması tavsiye edilmaz.



Üretici (İmalatçı): Sevinçler Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş., Başpınar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bölge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP / TURKEY (Türkiye); Tel: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.

Üreticinin yetkili temsilcisi: Limited Liability Company "OV Limited" (OV Limited LLC), 11, bina 1, Vostochnaya Street, 11, bina 1, Moscow, 115280; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com.

Üretim tarihi:
Parti numarası (lot):
Raf ömrü:



Varyant versiyon örneğinde nakliye ambalajı düzenleri:
4. LIVDRY® yetişkin (külot) bezleri, bedenler: M, L - 30 adet/paket.

M beden için düzen, 30 adet/paket.

Yetişkin bezleri (külot) LIVDRY®

(_____ tarihli № _____ tescil belgesi)

I. Versiyon: Yetişkin bezleri (külot) LIVDRY®, beden: M - 30 adet/paket.

II. Kullanım talimatları 1 adet.

İçindeki paket sayısı: 4 paket.

Genel Boyut:

Ağırlık:



Taşıma koşulları: Taşıma temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır. Nakliye paletler üzerinde veya paletsiz olarak gerçekleştirilir. Nakliye içindeki sıcaklık -10°C ila +25°C arasında olmalıdır.

Depolama koşulları: Yetişkin bezlerini karanlık, iyi havalandırılmış bir yerde, çocuklardan, ısıtıcılardan ve ateşten uzakta saklayın. Bu yer yağmur ve nemden korunmalıdır. Yetişkin bezlerinin depolarda paletler üzerinde saklanması tavsiye edilir. Depolama sıcaklığı: +18°C - +25°C. Ürünü son kullanma tarihinden sonra depolamayınız. Açılmış ambalajın yüksek hava nemi olan yerlerde saklanması tavsiye edilmez.

Üretici (imalatçı): Sevinçler Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş., Başpınar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP / TURKEY (Türkiye); Tel: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.

Üreticinin yetkili temsilcisi: Limited Liability Company "OV Limited" (OV Limited LLC), 11, bina 1, Vostochnaya Street, 11, bina 1, Moscow, 115280; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com.

Üretim tarihi:
Parti numarası (lot):
Raf ömrü:



L beden için düzen, 30 adet/paket.

Yetişkin bezleri (külot) LIVDRY®

(_____ tarihli № _____ tescil belgesi)

I. Versiyon: Yetişkin bezleri (külot) LIVDRY®, beden: L - 30 adet/paket.

II. Kullanım talimatları 1 adet.

İçindeki paket sayısı: 4 paket.

Genel Boyut:

Ağırlık:



Taşıma koşulları: Taşıma temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır. Nakliye paletler üzerinde veya paletsiz olarak gerçekleştirilir. Nakliye içindeki sıcaklık -10°C ila +25°C arasında olmalıdır.

Depolama koşulları: Yetişkin bezlerini karanlık, iyi havalandırılmış bir yerde, çocuklardan, ısıtıcılardan ve ateşten uzakta saklayın. Bu yer yağmur ve nemden korunmalıdır. Yetişkin bezlerinin depolarda paletler üzerinde saklanması tavsiye edilir. Depolama sıcaklığı: +18°C - +25°C. Ürünü son kullanma tarihinden sonra depolamayınız. Açılmış ambalajın yüksek hava nemi olan yerlerde saklanması tavsiye edilmez.

ısıtıcılardan ve ateşten uzakta saklayın. Bu yer yağmur ve nemden korunmalıdır. Yetişkin bezlerinin depolarda paletler üzerinde saklanması tavsiye edilir. Depolama sıcaklığı: +18°C - +25°C. Ürün son kullanma tarihinden sonra depolamayınız. Açılmış ambalajın yüksek hava nemi olan yerlerde saklanması tavsiye edilmez.

Üretici (imalatçı): Sevinçler Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş., Başpınar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bölge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZİANTEP / TURKEY (Türkiye); Tel: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.

Üreticinin yetkili temsilcisi: Limited Liability Company "OV Limited" (OV Limited LLC), 11, bina 1, Vostochnaya Street, 11, bina 1, Moscow, 115280; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com.

Üretim tarihi:

Parti numarası (lot):

Raf ömrü:



Semboller ve simgeler:

Sembol türü ve tanımlama	Açıklama
	Lütfen kullanım talimatlarına bakınız
	Avrupa Ekonomik Alanı ile Uyumluluk
	Nemden uzak tutun
	Güneş ışığı rengine maruz kalmaktan kaçının
	Yeniden kullanım yasağı
	Sıcaklık limiti
	Çöp kutusuna atın
	Kanalizasyon sistemi yoluyla bertarafın yasaklanması
	Düşük yoğunluklu polietilen (yüksek basınç)
	Bez boyutu
	Bez boyutu
	Erkekler ve kadınlar için geçerlidir
	Bel ölçüsü

	Bel ölçüsü
	Bel ölçüsü
	Paket başına yetişkin bezi sayısı
	Paket başına yetişkin bezi sayısı
	Damlacık görüntüsü şeklinde emicilik derecesi
	Süper emici
	Alerjiye neden olmaz
	Koruyucu bariyerlerin varlığı
	Nem göstergesi
Referans	/kullanım talimatları için bağlantı/

Taşıma ambalajı üzerindeki semboller ve işaretler:

Sembol türü ve tanımlama	Açıklama
	Kullanım talimatlarına bakın
	Güneş ışığına maruz bırakmayın
	Nemden uzak tutun

Not: "Alerjiye neden olmaz" sembolü Ek 3'te verilen belgelerle onaylanmıştır. Cilt tahriş edici çalışmaların protokolleri

PAKETLEME

Tüketici ambalajları

Ürücü tarafından belirlenecek miktarlarda yetişkin bezleri:

- LIVDRY® Yetişkin bezleri, bedenler:
M - 10/30 adet, L - 10/30 adet.
- LIVDRY® Yetişkin bezleri (külot), bedenler:
M - 10/30 adet, L - 10/30 adet.

düşük yoğunluklu (yüksek basınçlı) polietilenden yapılmış paketlerde

taşıma ve depolama sırasında güvenliğini sağlar.

Malzeme alçak yoğunluklu polietilen (yüksek basınç), AKM marka (üretici AKM Karton ve Plastik Ambalaj San. Tic A.Ş., ülke Türkiye)

Tüketici ambalajı parametreleri:

İsim	Paket içi adeti	Beden	Beden ölçüleri mm (±10%)	Ağırlık (ürün dahil), gr (±10%)
Yetişkin bezi LIVDRY®	10 adet/paket	M	250x180x150	800
		L	290x180x160	950
	30 adet/paket	M	165x440x260	2300
		L	183x440x280	2700
Yetişkin bezi (külot) LIVDRY®	10 adet/paket	M	210x200x120	700
		L	230x200x130	800
	30 adet/paket	M	140x430x250	2000
		L	155x460x260	2200

Nakliye ambalajı

Yetişkin bezleri, düşük yoğunluklu (yüksek basınçlı) polietilen poşetlerde taşınmaktadır. Aşağıdaki tabloya göre içindeki tüketici grubu paketlerinin (paketlerinin) sayısı.

Malzeme Yüksek yoğunluklu düşük yoğunluklu polietilen, KIMPACK marka (üretici ABY Plastik Ambalaj ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş., ülke Türkiye).

İsim	Paket içi adeti	Nakliye ambalajındaki paket adedi	Beden	Beden ölçüleri mm (±10%)	Ağırlık (ürün dahil), gr (±10%)
Yetişkin bezi LIVDRY®	10 adet/paket	6 paket	M	530x300x230	4990
			L	470x380x270	5700
	30 adet/paket	4 paket	M	660x440x260	9200
			L	730x440x280	10700
Yetişkin bezi (külot) LIVDRY®	10 adet/paket	8 paket	M	480x380x200	5500
			L	490x380x200	6200
	30 adet/paket	4 paket	M	560x430x250	7900
			L	620x460x260	8900

Ürünlerin sevk edildiği ambalajlar belirlenmiş standartlara uygundur ve malların uygun şekilde kullanılması koşuluyla, çeşitli kara ve deniz taşımacılığı türleriyle taşınması, aktarılması, depolanması ve uygun şekilde kullanılması sırasında güvenliğini sağlar.

İnsan vücudu ile temas süresi:

Sağlam deri ile temas.

Süre - kısa süreli, 24 saatten az.

OPERASYONEL ÖZELLİKLER

LIVDRY® yetişkin bezlerinin performansı :

Gösterge	Önemlilik	
Boyut	M	L
Ürün ağırlığı (g)	77 (±5%)	89 (±5%)
Emicilik (ml)	en az 2000	en az 2,300
Santrifüj sonrası sorpsiyon kapasitesi (g)	en az 433	en az 547
Absorpsiyon oranı (cm ³ /s)	en az 3.20	en az 3.21

Ters sorpsiyon (g)	0,1'den fazla değil	0,12'den fazla değil
0,9 sodyum klorür çözeltisinin 100 cm ³ emilim süresi (s)	İlk infüzyondan sonra, 150.	2. infüzyondan sonra, 250.
ekstrakt pH'ı	5,5-7,0	

LIVDRY® yetişkin bezlerinin (külot) performansı :

Gösterge	Önem	
Boyut	M	L
Ürün ağırlığı (g)	69 (±5%)	77 (±5%)
Emicilik (ml)	en az 2000	en az 2,300
Santrifüj sonrası sorpsiyon kapasitesi (g)	en az 440	en az 500
Absorpsiyon oranı (cm ³ /s)	en az 3.23	en az 3.22
Ters sorpsiyon (g)	0,17'den fazla değil	0,19'dan fazla değil
0,9 sodyum klorür çözeltisinin 100 cm ³ emilim süresi (s)	İlk infüzyondan sonra, 150.	2. infüzyondan sonra, 250.
ekstrakt pH'ı	5,5-7,0	

GÜVENLİK GEREKSİNİMLERİ

Tıbbi cihazlar aşağıdaki gerekliliklere tamamen uygundur:

- Ürünler, Rusya Federasyonu ve Avrasya Gümrük Birliği topraklarında zorunlu olan tüm sertifika ve direktiflere uygundur.
- Yetişkin bezlerinin dış kusurlara sahip olmasına izin verilmez - mekanik hasar (yırtık kenarlar, kesikler, hasarlı bağlantı elemanları vb.), çeşitli kökenlerden lekeler, çıplak gözle görülebilen yabancı kalıntılar.
- Yetişkin bezleri üzerindeki basılı görüntü nettir, bozulma veya boşluk yoktur. Bezin yüzeyinden liflerin koparılmasına veya mürekkebin lekelenmesine izin verilmez.
- Bez tasarımı, doğrusal boyutlar, teknik ve dekoratif tasarım, belirli bez veya yaş grubu için teknik belgelerde belirtilmiştir.
- Ürünler güçlü bir kimyasal kokuya sahip değildir.
- Ürünler, kullanımı insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek herhangi bir toksik unsur içermez.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Ürünün güvenli kullanımı için aşağıdaki kurallara uyulması tavsiye edilir:

- 1) Kullanılmış yetişkin bezlerini kanalizasyona atmayın.
- 2) Kusurlu veya hasarlı ambalaja sahip ürünleri kullanmayın.
- 3) Yetişkin bezlerini açık ateşe yakın yerlerde saklamayın.
- 4) Ürünleri talimatlara uygun olarak kullanın.
- 5) Gerekirse yetişkin bezini yenisiyle değiştirin.
- 6) Son kullanma tarihinden sonra yetişkin bezlerini kullanmayın.

ÇEVRE GÜVENLİĞİ

Üretim sürecinde tüm atıklar ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmektedir. Yetişkin bezlerinin üretimi sırasında hiçbir tehlikeli kimyasal atık oluşmaz, şirket tarafından üretilen tek atık, spesifikasyonlara uygun olmayan hammaddeler veya bitmiş ürünlerdir. Bu tür atıklar ayrıştırılır ve

EKİPMAN. TAŞIMA, DEPOLAMA, BERTARAF

Kullanım Koşulları

Arasındaki sıcaklıklarda ve yoğunlaşmaz +4°C ila +35°C kadar mcmde çalışacak şekilde tasarlanmıştır 80% (25°C)

Taşıma koşulları:

1. Araçlar temiz, kuru ve kokusuz olmalıdır.
2. Paletli veya paletsiz olarak taşınır.
3. Taşıma aracının içindeki sıcaklık -10°C ile +25°C arasında olmalıdır.

Saklama koşulları

Yetişkin bezlerini çocuklardan, ısıtıcılardan ve ateşten uzak, karanlık ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Bu yer yağmur ve nemden korunmalıdır. Yetişkin bezlerini depolarda paletler üzerinde saklamanızı öneririz.

Depolama sıcaklığı: +18°C - +25°C

Ürünü son kullanma tarihinden sonra saklamayın.

Açılmış ambalajın yüksek hava nemine sahip yerlerde saklanması tavsiye edilmez.

Bertaraf

Tıbbi ve önleyici tedavi tesislerinde bertaraf için gereklilikler.

Raf ömrü dolmuş veya ambalajı hasar görmüş ürünlerin bertarafı, SanPiN 2.1.3684-21 uyarınca "A" sınıfına ait tıbbi atık olarak, kullanımlarını engelleyen herhangi bir yöntemle gerçekleştirilir. Ürünlerin kullanımı sonucunda ortaya çıkan atıklar, 21.11.2011 tarihli ve 323-FZ sayılı Federal Kanunun 49. Maddesi uyarınca tıbbi atık olarak sınıflandırılmaktadır. "Rusya Federasyonu'nda Vatandaşların Sağlığının Korunması Hakkında" ve SanPiN 2.1.3684-21 "Tıbbi Atık Yönetimi için Sıhhi ve Epidemiyolojik Gereklilikler", Sınıf B (epidemiyolojik olarak tehlikeli atık) uyarınca imha edilmelidir.

Evde bertaraf için gereklilikler.

Kullanılmış ve açılmamış ürünler, son kullanma tarihinden sonra, evsel atık olarak evde imha edilmelidir.

Kullanılmış yetişkin bezlerinin kanalizasyona atılması kesinlikle yasaktır.

Bezi kullandıktan sonra, mikroorganizmaların yayılmasını ve böcekleri çeken kötü kokuları önlemek için kapalı bir kaba koyun.

Kullanılmış yetişkin bezlerini evde uzun süre saklamayın. Kullanılmış yetişkin bezlerini evde saklamak için özel antibakteriyel kaplar kullanmanızı öneririz.

GARANTİLER VE SORUMLULUK

Garanti yükümlülükleri

Sadece uygun taşıma, depolama ve kullanım durumunda, üretici, ürünlerin kalitesinin üretim tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süreyle üretici sertifikalarına uygun olacağını garanti eder.

Islah

"Yetişkin bezleri LIVDRY®" tıbbi ürününün kalitesi, iddiaları ve kullanımı ile ilgili sorularınız için üreticinin Rusya Federasyonu'ndaki yetkili temsilcisi ile iletişime geçin:

Sınırlı Sorumluluk Şirketi OV Limited

11, building 1, Vostochnaya street, Moskova, 11, building 1, 11, Moskova 115280

№ 248 78

STANDARTLARIN LİSTESİ

TS EN 46003	Kalite yönetim sistemleri. Tıbbi cihazlar. Özel uygulama gereksinimleri EN ISO 9003
ISO 11948-1:1996	Yetişkin bezleri. Yetişkin bezleri -- Bölüm 1: Tüm ürünün test edilmesi

RUSYA ULUSAL STANDARTLARI LİSTESİ

GOST P 55082-2012	Tıbbi kağıt ürünleri. Yetişkinler için yetişkin bezleri. Genel teknik koşullar
GOST R 57889-2021	İnsan vücuduna giymek için idrar emici ürünler. Genel teknik koşullar
GOST R ISO 15223-1-2020	Tıbbi cihazlar. Tıbbi cihazların etiketlenmesinde, etiketlerinde ve beraberindeki belgelerde kullanılan semboller. Bölüm 1. Temel gerekler.
GOST 31214-2016	Tıbbi ürünler. Toksikolojik, sıhhi ve kimyasal çalışmalar, sterilite ve pirojenite testleri için sunulan numuneler ve belgeler için gereklilikler
GOST P 52770-2016	Tıbbi cihazlar. Güvenlik gereksinimleri. Sıhhi-kimyasal ve toksikolojik test yöntemleri
ISO 10993-1-2021	Tıbbi cihazlar. Tıbbi cihazların biyolojik etkilerinin değerlendirilmesi. Bölüm 1. Risk yönetiminde değerlendirme ve araştırma
GOST R ISO 10993-2-2009	Tıbbi cihazlar. Tıbbi cihazların biyolojik etkilerinin değerlendirilmesi. Bölüm 2. Hayvanların tedavisi için gereklilikler
ISO 10993-5-2011	Tıbbi cihazlar. Tıbbi cihazların biyolojik etkilerinin değerlendirilmesi. Bölüm 5. Sitotoksikite testi: in vitro yöntemler
ISO 10993-10-2011	Tıbbi cihazlar. Tıbbi cihazların biyolojik etkilerinin değerlendirilmesi. Bölüm 10. Tahriş edici ve hassaslaştırıcı çalışmalar
ISO 10993-12-2015	Tıbbi cihazlar. Tıbbi cihazların biyolojik etkilerinin değerlendirilmesi. Bölüm 12. Numune hazırlama ve kontrol numuneleri

ÜRETİCİNİN RUSYA'DAKİ YETKİLİ TEMSİLCİSİ

Sınırlı Sorumluluk Şirketi "OV Limited"

11, building 1, Vostochnaya street, Moskova. 11, building 1, 11, Moskova 115280

Tel: 8 (499) 643-44-90

12-09-2024

«УТВЕРЖДАЮ»
Sevinçler Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.

Генеральный Директор
(должность)

ЯСИН СЕВИНЧ
(имя, фамилия)

(подпись)

10.09.2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
на медицинское изделие
Подгузники для взрослых LIVDRY®

Производство Sevinçler Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş., Турция

Версия 2.

Содержание

НАИМЕНОВАНИЕ И КОМПЛЕКТНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ...	3
СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	4
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ	4
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
МАРКИРОВКА	11
УПАКОВКА	45
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА	46
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	47
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	48
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	48
ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	48
МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ	49
ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ	49
ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	50
ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ	51
ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ РФ	51
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	52

НАИМЕНОВАНИЕ И КОМПЛЕКТНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование:

Подгузники для взрослых LIVDRY®

I. Варианты исполнения:

1. Подгузники для взрослых LIVDRY®, размеры: M, L - 10 шт./уп.
2. Подгузники для взрослых LIVDRY®, размеры: M, L - 30 шт./уп.
3. Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размеры: M, L - 10 шт./уп.
4. Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размеры: M, L - 30 шт./уп.

II. Инструкция по применению - 1 шт.

Далее сокращено: «подгузники», «медицинское изделие», «изделие».

Комплектность:

Подгузники для взрослых LIVDRY®

I. Варианты исполнения:

1. Подгузники для взрослых LIVDRY®, размеры: M, L - 10 шт./уп.
2. Подгузники для взрослых LIVDRY®, размеры: M, L - 30 шт./уп.
3. Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размеры: M, L - 10 шт./уп.
4. Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размеры: M, L - 30 шт./уп.

II. Инструкция по применению - 1 шт. (поставляется на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет)

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Производитель

Sevinçler Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.

BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAH. O.S.B. 5. BÖLGE 83557 NOLU CAD. NO: 9 İÇ KAPI

NO: 1 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP/ Türkiye (Турция)

Телефон: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00

info@sevinclersaglik.com

www.sevinclersaglik.com

Место производства

SEVINÇLER SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAŞPINAR (ORGANİZE) OSB MAH. O.S.B. 5. BÖLGE 83557 NOLU CAD. NO:9 İÇ KAPI

NO:1 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP/TÜRKİYE (Турция)

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Подгузники для взрослых LIVDRY® предназначены для впитывания и удержания мочи и фекальных масс взрослого, используются для ухода за больными, страдающими недержанием, лежачими больными и в других необходимых случаях.

Используются в домашних условиях и/или в медицинских учреждениях.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для ухода за взрослыми пациентами, страдающими средней и тяжёлой степенью недержания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Возможна индивидуальная непереносимость компонентов подгузников.

Возможные побочные эффекты:

Возможны аллергические реакции, при несоблюдении рекомендации по использованию изделий – опрелость, раздражение кожных покровов.

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – 1.

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий:

280360 (Подгузники для взрослых)

233900 (Трусы при недержании мочи для взрослых, одноразового использования).

В зависимости от обхвата талии человека, который использует подгузник, существует их размерная классификация (таблица 1).

Таблица 1. Размерная классификация подгузников

Наименование группы подгузников	Диапазон обхвата талии, см	Условное обозначение размерной группы подгузников
Подгузники для взрослых LIVDRY®		
Средние	85-125	M
Большие	100-150	L
Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®		
Средние	70-120	M
Большие	100-150	L

Классификация по ГОСТ Р 55082-2012:

В зависимости от обхвата талии/бедер человека:

Средние - Подгузники для взрослых LIVDRY®, размер: M, Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размер: M.

Большие - Подгузники для взрослых LIVDRY®, размер: L, Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размер: L.

В зависимости от количества впитываемой жидкости - для людей с тяжелой степенью недержания.

Классификация по ГОСТ Р 57889-2021:

Размер:

M – Подгузники для взрослых LIVDRY®, размер: M, Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размер: M.

L – Подгузники для взрослых LIVDRY®, размер: L, Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размер: L.

В зависимости от количества впитываемой жидкости - для тяжелой степени недержания.

В зависимости от количества жидкости, которую они впитывают до момента протекания (абсорбция до момента протекания) – 4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция подгузника для взрослых LIVDRY®

Подгузники для взрослых состоят из нескольких слоев (рисунок 1).

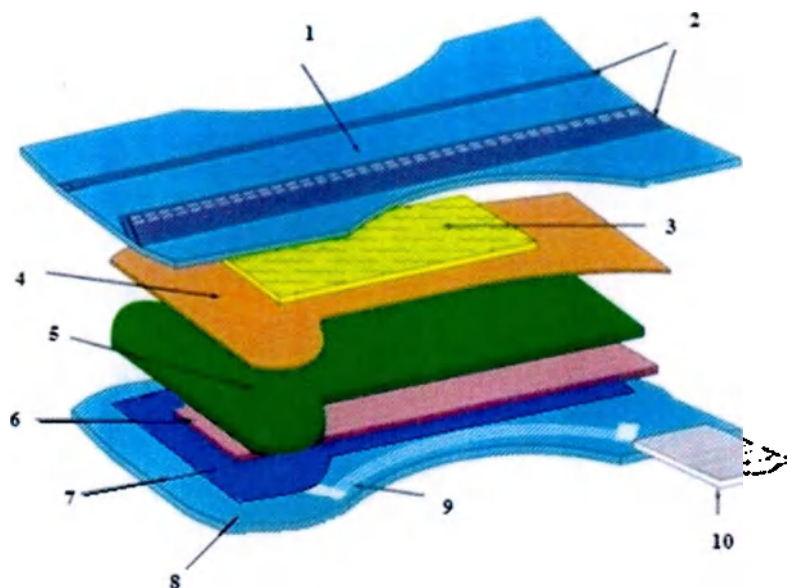


Рисунок 1. Конструкция подгузника для взрослых LIVDRY®

- 1 – Верхний покровный слой;
- 2 – Защитный слой, препятствующий протеканию жидкости, на которых расположены две эластичные резинки;
- 3 – Абсорбирующий и распределительный слой выполняет функцию по увеличению скорости впитывания подгузником жидкости и функцию распределения жидкости по всему подгузнику во избежание накопления выделений в одном месте.
- 4, 6 – Барьерные элементы - верхняя барьерная салфетка (- 4) и нижняя барьерная салфетка (-6), которые позволяют впитывающему слою оставаться в исходном месте, даже при наполнении подгузника.
- 5 – Основной абсорбирующий слой.
- 7 – Абсорбирующий слой и прослойки снизу закрываются защитным слоем с напечатанными изображениями на нем. Этот слой помогает удерживать всю жидкость внутри подгузника, избегая протекания.
- 8 – Нижний покровный слой с зоной индикатора влажности – напечатанных специальным способом символов, которые исчезают при наполнении подгузника жидкостью
- 9 – Манжеты для ног. Они представлены тремя резинками, которые обхватывают ноги надевшего подгузник.
- 10 – Фиксирующие элементы – застежки. Они сделаны из материала “Velcro”, представляют собой липучки (система «петли-крючки»), по 2 шт. с каждой стороны, с помощью которых можно открывать и закрывать подгузник.

Состав подгузников для взрослых LIVDRY:

Компонент	Наименование материала	Марка/Состав	Производитель
1. Верхний покровный слой	PP Spunbond Nonwoven / ПП	Термоскрепленный нетканый материал из полипропиленовых	Global Sentetik Kumaş San ve Tic

	Спандбонд Нонвовен	нитей (100% полипропилен), цвет белый (диоксид титана CI 77891)	A.Ş (Турция)
2.1. Защитный слой (верхний)	2.1. PP Spunbond Nonwoven / ПП Спандбонд Нонвовен	2.1. Термоскрепленный нетканый материал из полипропиленовых нитей (100% полипропилен), цвет белый (диоксид титана CI 77891)	2.1. Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Турция)
2.2. Эластичная резинка	2.2. Spandex Fiber/ Спандекс	2.2. Creora®/Сегментированная полеуретанмочевина (>95%); стабилизатор (0.5%); диметилацетамид (<0.6%) CAS No.: 127-19-5; диоксид титана (2%) CAS No.: 13463-67-7; полидиметилсилоксан (1 %) CAS No.: 63148-62-9.	2.2. Hyosung Corporation (Корея)
3. Абсорбирующий и распределительный слой	Nonwoven Carded – Air Through Bonded/ Кардочесанный нетканый материал	Akinal / (Полиэфирное волокно (PET)), окрашено голубым красителем (CI 74160)	Akinal Sentetik Tekstil San.ve Tic.A.Ş. (Турция)
4. Барьерный элемент - Верхняя барьерная салфетка	PP Spunbond Nonwoven / ПП Спандбонд Нонвовен	Термоскрепленный нетканый материал из полипропиленовых нитей (100% полипропилен), цвет белый (диоксид титана CI 77891)	Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Турция)
5. Основной абсорбирующий слой	1) SAP / САП (Супер- абсорбирующий полимер); 2) Fluff Pulp/ Целлюлоза	1) FAVOR SXM 9155/ Полиакрилат натрия CAS-No.: 9003-04-7 2) GP-S10 / целлюлоза CAS-No.: 65996-61-4 (93%); вода CAS- No.: 7732-18-5 (7%)	1) Evonik Nutrition & Care GmbH (Германия) 2) GP Cellulose GmbH (Швейцария)
6. Барьерный элемент - Нижняя барьерная салфетка	PP Spunbond Nonwoven / ПП Спандбонд Нонвовен	Термоскрепленный нетканый материал из полипропиленовых нитей (100% полипропилен), цвет белый (диоксид титана CI 77891)	Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Турция)
7. Защитный слой (нижний)	1) Non breathable PE Film/ Недышащая полиэтиленовая плёнка 2) Типографическая краска	1) Gulsan/ полиэтилен 2) Videojet® V499-D	1) GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Турция) 2) Videojet Technologies, Inc. (Великобритания)
8. Нижний покровный слой с зоной индикатора влажности	1) PP Spunbond Nonwoven / ПП Спандбонд Нонвовен 2) Типографическая краска	1) Термоскрепленный нетканый материал из полипропиленовых нитей (100% полипропилен), цвет белый (диоксид титана CI 77891) 2) Videojet® V499-D	1) Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Турция) 2) Videojet Technologies, Inc.

			(Великобритания)
9. Манжеты для ног	Spandex Fiber/ Спандекс	Creora® / Сегментированная полиуретанмочевина (>95%); стабилизатор (0.5%); диметилацетамид (<0.6%) CAS No.: 127-19-5; диоксид титана (2%) CAS No.: 13463-67-7; полидиметилсилоксан (1 %) CAS No.: 63148-62-9	Hyosung Corporation (Корея)
10. Фиксирующие элементы – застежки	NW CLOSURE TAPES (NW(Y- bond)/ Ленточная застёжка (NW(Y- bond)	Nitto / Полипропилен (20%), полиолефиновая пленка (35%), клей (35%), крючок (~10%)	NITTO BENTO BANTÇILIK TEM. MAD.SAN.TİC. A.Ş. (Турция)

Другие материалы:

Компонент	Наименование материала	Марка / состав	Производитель
Клей для скрепления слоёв	Hotmelt / Термоплавкий клей	NW1038 ZP/ Полимеры 60%, термопластичные эластомеры 20%, минеральное масло 17%, добавки 2,5%, антиоксидант 0,5%.	H.B. Fuller Deutschland GmbH (Германия)
Клей для эластика	Hotmelt / Термоплавкий клей	Lunatack D 7214 ZP/ Гидрогенизированная углеводородная смола 64%, термопластичная резина 15%, дистилляты нефти (парафиновые) 15%, смола на основе альфа-метилстирола 5,5%, антиоксидант 0,5%.	H.B. Fuller Deutschland GmbH (Германия)

Массогабаритные характеристики:

Подгузники для взрослых LIVDRY®, размер: M

Номер п/п	Показатель	Характеристики	Допустимое отклонение
Масса			
1	САП (г)	9	± 1
2	Распушенная целлюлоза (г)	45	± 1
Размеры			
3	Ширина (мм)	690	± 5
4	Длина (мм)	800	± 5
5	Длина абсорбирующего слоя (мм)	635	± 10
6	Защитный слой (ширина, мм)	575	± 5
7	Верхний покровный слой (ширина, мм)	240	± 5
8	Застежка (длина, мм)	30	± 5

Подгузники для взрослых LIVDRY®, размер: L

Номер п/п	Показатель	Характеристики	Допустимое
-----------	------------	----------------	------------

			отклонение
Масса			
1	САП (г)	12	± 1
2	Распушенная целлюлоза (г)	50	± 1
Размеры			
3	Ширина (мм)	790	± 5
4	Длина (мм)	925	± 5
5	Длина абсорбирующего слоя (мм)	740	± 10
6	Защитный слой (ширина, мм)	675	± 5
7	Верхний покровный слой (ширина, мм)	235	± 5
8	Застежка (длина, мм)	30	± 5

Строение подгузников для взрослых (трусы) LIVDRY®

Строение подгузников для взрослых (трусы) LIVDRY® (рисунок 2).

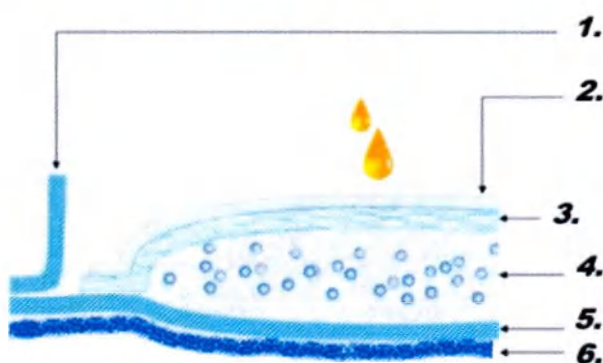


Рисунок 2. Строение подгузников для взрослых (трусы) LIVDRY®

- 1 – защитный слой;
- 2 – верхний покровный слой;
- 3 – распределительный слой;
- 4 – абсорбирующий слой;
- 5 – защитный слой;
- 6 – нижний покровный слой с зоной индикатора влажности.

Внешнее строение подгузников для взрослых (трусы) LIVDRY® (рисунок 3).

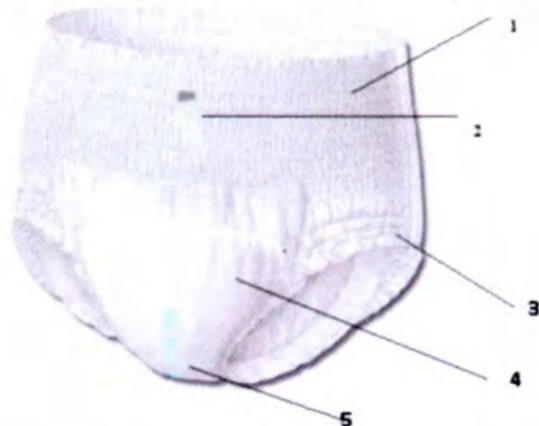


Рисунок 3. Схематическое изображение подгузников для взрослых (трусы) LIVDRY®

- 1 – опоясывающая резинка;
- 2 – липкая лента, которая используется при сворачивании белья для его утилизации;

3 – манжеты, обрамляющие ноги человека;

4 – резинки, расположенные на поверхности подгузников для взрослых (трусы) LIVDRY®;

5 – индикатор влажности, представленный в виде текста (дата и время изготовления, размер).

Состав подгузников для взрослых (трусы) LIVDRY®:

Компонент	Наименование материала	Марка/Состав	Производитель
1. Защитный слой (верхний)	PP Spunbond Nonwoven / ПП Спандбонд Нонвовен	Термоскрепленный нетканый материал из полипропиленовых нитей (100% полипропилен), цвет белый (диоксид титана CI 77891)	Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Турция)
2. Верхний покровный слой	PP Spunbond Nonwoven / ПП Спандбонд Нонвовен	Термоскрепленный нетканый материал из полипропиленовых нитей (100% полипропилен), цвет белый (диоксид титана CI 77891)	Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Турция)
3. Распределительный слой	Nonwoven Carded – Air Through Bonded/ Кардочесанный нетканый материал	Akınal / (Полиэфирное волокно (PET)), окрашенный белым красителем (CI 77891)	Akınal Sentetik Tekstil San.ve Tic.A.Ş. (Турция)
4. Абсорбирующий слой	1) SAP / САП (Супер-абсорбирующий полимер); 2) Fluff Pulp/ Целлюлоза	1) FAVOR SXM 9155/ Полиакрилат натрия CAS-No.: 9003-04-7 2) GP-S10 / целлюлоза CAS-No.: 65996-61-4 (93%); вода CAS-No.: 7732-18-5 (7%)	1) Evonik Nutrition & Care GmbH (Германия) 2) GP Cellulose GmbH (Швейцария)
5. Защитный слой (нижний)	Non breathable PE Film/ Недышащая полиэтиленовая плёнка	Gulsan/ полиэтилен	GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Турция)
6. Нижний покровный слой с зоной индикатора влажности	1) PP Spunbond Nonwoven / ПП Спандбонд Нонвовен 2) Типографическая краска	1) Термоскрепленный нетканый материал из полипропиленовых нитей (100% полипропилен), цвет белый (диоксид титана CI 77891) 2) Videojet® V499-D	1) Global Sentetik Kumaş San ve Tic A.Ş (Турция) 2) Videojet Technologies, Inc. (Великобритания)
7. Опоясывающая резинка	Spandex Fiber/ Спандекс	Creora® / Сегментированные полиуретанмочевины (>95%); стабилизатор (0.5%); диметилацетамид (<0.6%) CAS No.: 127-19-5; диоксид титана (2%) CAS No.: 13463-67-7;	Hyosung Corporation (Корея)

		полидиметилсилоксан (1 %) CAS No.: 63148-62-9	
8. Манжеты для ног	Spandex Fiber/ Спандекс	Creora® / Сегментированные полиуретанмочевины (>95%); стабилизатор (0.5%); диметилацетамид (<0.6%) CAS No.: 127-19-5; диоксид титана (2%) CAS No.: 13463-67-7; полидиметилсилоксан (1 %) CAS No.: 63148-62-9	Hyosung Corporation (Корея)
9. Резинки на поверхности белья	Spandex Fiber/ Спандекс	Creora® / Сегментированные полиуретанмочевины (>95%); стабилизатор (0.5%); диметилацетамид (<0.6%) CAS No.: 127-19-5; диоксид титана (2%) CAS No.: 13463-67-7; полидиметилсилоксан (1 %) CAS No.: 63148-62-9	Hyosung Corporation (Корея)
10. Липкая лента	Disposal Tapes / Липка лента для утилизации	Nitto / полиолефиновая пленка (PP Film) - 60%, клей - 40%	NITTO BENTO BANTÇILIK TEM. MAD.SAN.TİC. A.Ş. (Турция)

Другие материалы:

Компонент	Наименование материала	Марка / состав	Производитель
Клей для скрепления слоёв	Hotmelt / Термоплавкий клей	NW1038 ZP/ Полимеры 60%, термопластичные эластомеры 20%, минеральное масло 17%, добавки 2,5%, антиоксидант 0,5%.	H.B. Fuller Deutschland GmbH (Германия)
Клей для эластика	Hotmelt / Термоплавкий клей	Lunatack D 7214 ZP/ Гидрогенизированная углеводородная смола 64%, термопластичная резина 15%, дистилляты нефти (парафиновые) 15%, альфа метил стирол на основе смолы 5,5%, антиоксидант 0,5%.	H.B. Fuller Deutschland GmbH (Германия)

Массогабаритные характеристики:

Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размер: M

Номер п/п	Показатель	Характеристики	Допустимое отклонение
Масса			
1	САП (Супер-абсорбирующий полимер) (г)	11	± 1
2	Распушенная целлюлоза (г)	33	± 1
Размеры			
3	Ширина (мм)	635	± 5
4	Длина (мм)	795	± 5
5	Длина абсорбирующего слоя (мм)	480	± 10

Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размер: L

Номер п/п	Показатель	Характеристики	Допустимое отклонение
-----------	------------	----------------	--------------------------

Масса			
1	САП (Супер-абсорбирующий полимер) (г)	13	± 1
2	Распушенная целлюлоза (г)	33	± 1
Размеры			
3	Ширина (мм)	755	± 5
4	Длина (мм)	850	± 5
5	Длина абсорбирующего слоя (мм)	500	± 10

МАРКИРОВКА

1. Маркировка потребительской упаковки

На потребительской групповой упаковке (пачке) медицинского изделия, указывают:

- наименование медицинского изделия;
 - страна производитель;
 - наименование и адрес изготовителя, контактные данные изготовителя;
 - произведено по заказу;
 - номер и дата выдачи регистрационного удостоверения;
 - краткое описание характеристик медицинского изделия и его использования (степень недержания, назначение медицинского изделия, класс, условия применения, предназначено для личной гигиены, для однократного применения);
 - условия хранения;
 - состав изделия (материал);
 - срок годности;
 - информация о нестерильности и нетоксичности (для подгузников для взрослых (трусы) LIVDRY®)
 - информация и месте нанесения даты производства и номера партии на упаковке;
 - количество в упаковке;
 - инструкции по применению в положении стоя (для подгузников для взрослых LIVDRY®);
 - инструкции по применению в положении лёжа (для подгузников для взрослых LIVDRY®);
 - инструкция по применению (для подгузников для взрослых (трусы) LIVDRY®);
 - список предупреждений;
 - обозначение соответствия стандартам ГОСТ Р 55082-2012, ГОСТ Р 57889-2021;
 - штрих-код;
 - информационные изображения-символы «супер-впитывающие», «не вызывают аллергии», «защитные барьеры», «индикатор влажности».
 - информационные изображения-символы «размер», «диапазон обхвата талии», «количество штук»;
 - символ «Применим для мужчин и женщин» (для подгузников для взрослых (трусы) LIVDRY®);
 - степень впитываемости в виде изображения капель;
 - открывать здесь;
 - символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
 - символ соответствия Европейским требованиям;
 - символ «Запрет на повторное применение»;
 - манипуляционные символы «Бережь от влаги», «Не допускать воздействия солнечного света», «Предел температуры»;
 - символы «Утилизировать в мусорную урну», «Запрет на утилизацию через канализационную систему»;
 - символ о материале изготовления упаковки «Полиэтилен низкой плотности (высокого давления)»;
 - информацию об уполномоченном представителе производителя на территории РФ и его контактную информацию.
 - ссылка на инструкцию по применению
- На полиэтилен низкой плотности (высокого давления), печатным способом наносится (см.

рисунок 4):

- дата производства;
- номер партии (лот);
- срок годности.


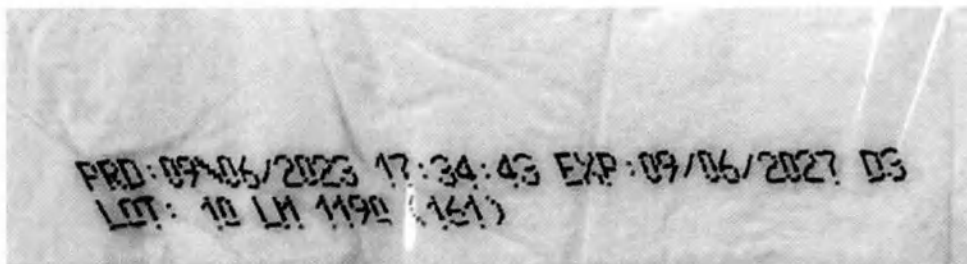


Рисунок 4. Пример нанесения даты производства, номера партии (лота) и срока годности на потребительскую групповую упаковку

Макеты потребительской упаковки на примере вариантов исполнения:

1. Подгузники для взрослых LIVDRY®, размеры: M, L - 10 шт./уп.

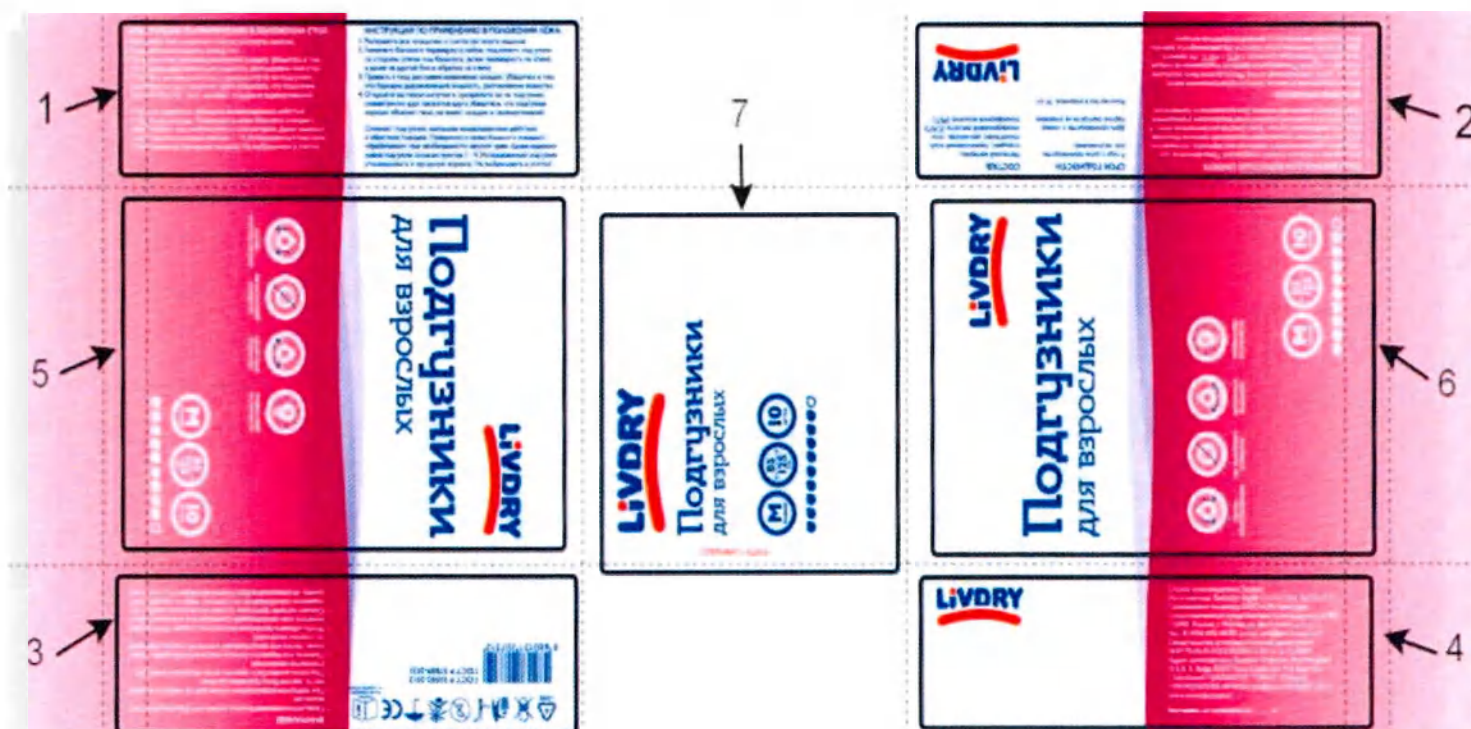

Макет потребительской упаковки:

Подгузники для взрослых LIVDRY®, размер: M - 10 шт./уп.

Рис. 1.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ:

1. Расправить все складочки и слегка растянуть изделие.
2. Подгузник расположить между ног.
3. Прижать к телу, расправив возможные складки. Убедиться в том, что барьеры удерживающие жидкость, расположены вовнутрь.
4. Откройте застежки-липучки и прикрепите их на подгузник, симметрично друг напротив друга убедитесь, что подгузник хорошо облегает тело, не имеет складок и перекручиваний.

Снимают подгузник, выполняя вышеназванные действия в обратном порядке. Поверхность кожи больного очищают, обрабатывают, при необходимости наносят крем. Далее надевают новый подгузник согласно пунктам 1 – 4. Использованный подгузник утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА:

1. Расправить все складочки и слегка растянуть изделие.
2. Лежачего больного перевернуть набок, подложить подгузник со стороны спины под больного, затем перевернуть на спину, а далее на другой бок и обратно на спину.
3. Прижать к телу, расправив возможные складки. Убедиться в том, что барьеры удерживающие жидкость, расположены вовнутрь.
4. Откройте застежки-липучки и прикрепите их на подгузник, симметрично друг напротив друга убедитесь, что подгузник хорошо облегает тело, не имеет складок и перекручиваний.

Снимают подгузник, выполняя вышеназванные действия в обратном порядке. Поверхность кожи больного очищают, обрабатывают, при необходимости наносят крем. Далее надевают новый подгузник согласно пунктам 1 – 4. Использованный подгузник утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

Рис. 2.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ LIVDRY®

Для средней и тяжелой степени недержания. Предназначены для впитывания и удержания мочи и фекальных масс взрослого, используются для ухода за больными, страдающими недержанием, лежачими больными и в других необходимых случаях. Класс средства для впитывания мочи - 4. Используются в домашних условиях и/или медицинских учреждениях. Предназначено для личной гигиены. Для однократного применения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от солнца и сырости. Рекомендуется хранение подгузников на складах на паллетах. Температура хранения: +18°C – +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха.

СРОК ГОДНОСТИ:

4 года с даты производства (см. на упаковке).

Дата производства и номер партии смотрите на упаковке.

Количество в упаковке: 10 шт.

СОСТАВ:

Нетканый материал, спандекс, термоплавкий клей, полиэтилен, целлюлоза, соль полиакриловой кислоты (САП), полиэфирное волокно (PET).

LIVDRY

Рис. 3.



ГОСТ Р 55082-2012
ГОСТ Р 57889-2021

ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием боковых липких лент убедитесь в чистоте ваших рук
- При повторном использовании липких лент не клейте их на то же место, где они были приклеены до этого
- Подгузник должен быть заменен, когда индикатор влажности становится незаметным
- Помните, что надевать и снимать подгузник необходимо только сзади, так как это предотвращает случайный перенос бактерий со стороны кишечника
- Чтобы избежать протекания подгузников, следует четко придерживаться всех рекомендаций производителя и лечащего врача
- Самыми частыми причинами протекания являются: ошибки при надевании (несоблюдение инструкции), неверно подобранный размер, неправильный выбор степени впитываемости подгузника

Рис. 4.

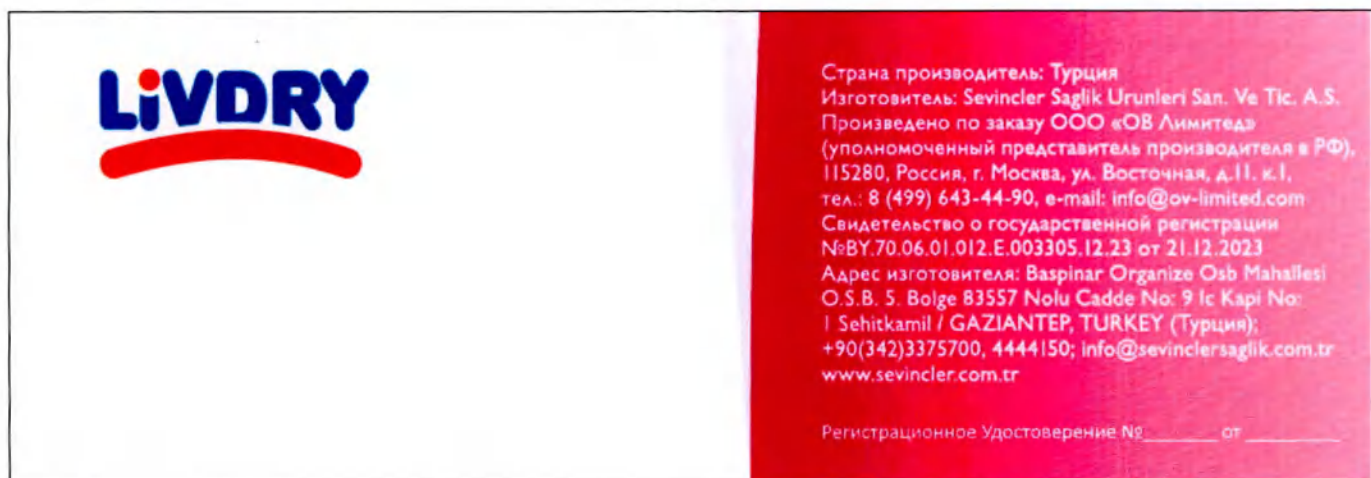


Рис. 5. и Рис. 6. (идентичные)



Рис. 7.



Макет потребительской упаковки:

Подгузники для взрослых LIVDRY®, размер: L - 10 шт./уп.

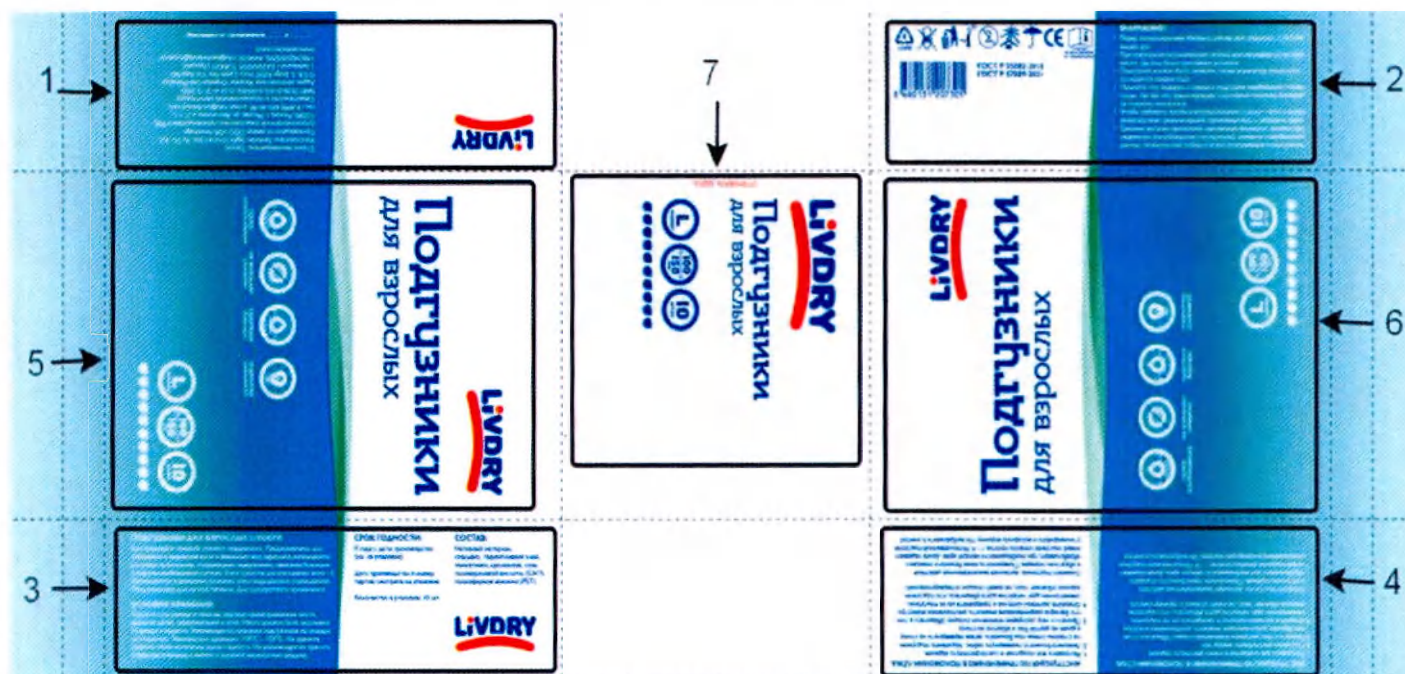


Рис. 1.



Страна производитель: Турция
Изготовитель: Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.
Произведено по заказу ООО «ОВ Лимитед»
(уполномоченный представитель производителя в РФ),
115280, Россия, г. Москва, ул. Восточная, д. 11, к. 1,
тел.: 8 (499) 643-44-90, e-mail: info@ov-limited.com
Свидетельство о государственной регистрации
№BY.70.06.01.012.Е.003305.12.23 от 21.12.2023
Адрес изготовителя: Baspinar Organize Osb Mahallesi
O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No: 9 Ic Kapi No:
I Sehitkamil / GAZIANTEP, TURKEY (Турция);
+90(342)3375700, 4444150; info@sevinclersaglik.com.tr
www.sevincler.com.tr

Регистрационное Удостоверение № _____ от _____

Рис. 2.



ГОСТ Р 55082-2012
ГОСТ Р 57889-2021

ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием боковых липких лент убедитесь в чистоте ваших рук
- При повторном использовании липких лент не клейте их на то же место, где они были приклеены до этого
- Подгузник должен быть заменен, когда индикатор влажности становится незаметным
- Помните, что надевать и снимать подгузник необходимо только сзади, так как это предотвращает случайный перенос бактерий со стороны кишечника
- Чтобы избежать протекания подгузников, следует четко придерживаться всех рекомендаций производителя и лечащего врача
- Самыми частыми причинами протекания являются: ошибки при надевании (несоблюдение инструкции), неверно подобранный размер, неправильный выбор степени впитываемости подгузника.

Рис. 3

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ LIVDRY®

Для средней и тяжелой степени недержания. Предназначены для впитывания и удержания мочи и фекальных масс взрослого, используются для ухода за больными, страдающими недержанием, лежачими больными и в других необходимых случаях. Класс средства для впитывания мочи - 4. Используются в домашних условиях и/или медицинских учреждениях. Предназначено для личной гигиены. Для однократного применения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости. Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C – +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха.

СРОК ГОДНОСТИ:

4 года с даты производства
(см. на упаковке).

Дата производства и номер партии смотрите на упаковке.

Количество в упаковке: 10 шт.

СОСТАВ:

Нетканый материал, спандекс, термопластичный клей, полиэтилен, целлюлоза, соль полиакриловой кислоты (САП), полиэфирное волокно (PET).



Рис. 4.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ:

1. Расправить все складочки и слегка растянуть изделие.
2. Подгузник расположить между ног.
3. Прижать к телу, расправив возможные складки. Убедитесь в том, что барьеры удерживающие жидкость, расположены вовнутрь.
4. Откройте застежки-липучки и прикрепите их на подгузник, симметрично друг напротив друга убедитесь, что подгузник хорошо облегает тело, не имеет складок и перекручиваний.

Снимают подгузник, выполняя вышеназванные действия в обратном порядке. Поверхность кожи больного очищают, обрабатывают, при необходимости наносят крем. Далее надевают новый подгузник согласно пунктам 1 – 4. Использованный подгузник утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА:

1. Расправить все складочки и слегка растянуть изделие.
2. Лежащего больного перевернуть набок, подложить подгузник со стороны спины под больного, затем перевернуть на спину, а далее на другой бок и обратно на спину.
3. Прижать к телу, расправив возможные складки. Убедитесь в том, что барьеры удерживающие жидкость, расположены вовнутрь.
4. Откройте застежки-липучки и прикрепите их на подгузник, симметрично друг напротив друга убедитесь, что подгузник хорошо облегает тело, не имеет складок и перекручиваний.

Снимают подгузник, выполняя вышеназванные действия в обратном порядке. Поверхность кожи больного очищают, обрабатывают, при необходимости наносят крем. Далее надевают новый подгузник согласно пунктам 1 – 4. Использованный подгузник утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

Рис. 5. и Рис. 6. (идентичные)



Рис. 7.



2. Подгузники для взрослых LIVDRY®, размеры: M, L - 30 шт./уп.



Макет потребительской упаковки:

Подгузники для взрослых LIVDRY®, размеры: M- 30 шт./уп.

Рис. 1.



Рис. 2.

ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием боковых липких лент убедитесь в чистоте ваших рук
- При повторном использовании липких лент не клейте их на то же место, где они были приклеены до этого
- Подгузник должен быть заменен, когда индикатор влажности становится незаметным
- Помните, что надевать и снимать подгузник необходимо только сзади, так как это предотвращает случайный перенос бактерий со стороны кишечника
- Чтобы избежать протекания подгузников, следует четко придерживаться всех рекомендаций производителя и лечащего врача
- Самыми частыми причинами протекания являются: ошибки при надевании (несоблюдение инструкции), неверно подобранный размер, неправильный выбор степени впитываемости подгузника.



ГОСТ Р 55082-2012
ГОСТ Р 57889-2021

Рис. 3.

СОСТАВ:
Нетканый материал, ст. андекс, термопластичный клей, полиэтилен, целлюлоза, соли полиакриловой кислоты (САП), полиэфирное волокно (РЕТ).

СРОК ГОДНОСТИ:
4 года с даты производства (с в. на упаковке).

Дата производства и номер партии смотрите на упаковке.

Количество в упаковке: 30 шт.

Страна производитель: Турция, Изготовитель: Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S. Произведено по заказу ООО «ОВ Лимитед» (уполномоченный представитель производителя в РФ), 115280, Россия, г. Москва, ул. Восточная, д.11, к.1, тел.: 8 (499) 643-44-90, e-mail: info@ov-limited.com. Свидетельство о государственной регистрации №BY.70.06.01.012.E.003305.12.23 от 21.12.2023
Адрес изготовителя: Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No: 9 Ic Kapi No: 1 Sehitkamil / GAZIANTEP, TURKEY (Турция); +90(342)3375700, 4444150; info@sevinclersaglik.com.tr; www.sevincler.com.tr




8 680131 207299

Регистрационное Удостоверение № _____ от _____

Рис. 4.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ:

1. Расправить все складочки и слегка растянуть изделие.
2. Подгузник расположить между ног.
3. Прижать к телу, расправив возможные складки. Убедитесь в том, что барьеры удерживающие жидкость, расположены вовнутрь.
4. Откройте застежки-липучки и прикрепите их на подгузник, симметрично друг напротив друга убедитесь, что подгузник хорошо облегает тело, не имеет складок и перекручиваний.

Снимают подгузник, выполняя вышеназванные действия в обратном порядке. Поверхность кожи больного очищают, обрабатывают, при необходимости наносят крем. Далее надевают новый подгузник согласно пунктам 1 – 4. Использованный подгузник утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА:

1. Расправить все складочки и слегка растянуть изделие.
2. Лежачего больного перевернуть набок, подложить подгузник со стороны спины под больного, затем перевернуть на спину, а далее на другой бок и обратно на спину.
3. Прижать к телу, расправив возможные складки. Убедитесь в том, что барьеры удерживающие жидкость, расположены вовнутрь.
4. Откройте застежки-липучки и прикрепите их на подгузник, симметрично друг напротив друга убедитесь, что подгузник хорошо облегает тело, не имеет складок и перекручиваний.

Снимают подгузник, выполняя вышеназванные действия в обратном порядке. Поверхность кожи больного очищают, обрабатывают, при необходимости наносят крем. Далее надевают новый подгузник согласно пунктам 1 – 4. Использованный подгузник утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

Рис. 5, и Рис. 6. (идентичные)



Рис. 7.

LIVDRY

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Подгузники для взрослых



Макет потребительской упаковки:

Подгузники для взрослых LIVDRY®, размер: L - 30 шт./уп.



Рис. 1.

LIVDRY

Страна производитель: Турция
Изготовитель: Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.
Произведено по заказу ООО «ОВ Лимитед»
(уполномоченный представитель производителя в РФ),
115280, Россия, г. Москва, ул. Восточная, д.11. к.1,
тел.: 8 (499) 643-44-90, e-mail: info@ov-limited.com
Свидетельство о государственной регистрации
№BY.70.06.01.012.E.003305.12.23 от 21.12.2023
Адрес изготовителя: Baspinar Organize Osb Mahallesi
O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No: 9 Ic Kapi No:
I Sehitkamil / GAZIANTEP, TURKEY (Турция);
+90(342)3375700, 4444150; info@sevinclersaglik.com.tr
www.sevincler.com.tr

Регистрационное Удостоверение № _____ от _____

Рис. 2.



8 680131 207282

ГОСТ Р 55082-2012
ГОСТ Р 57889-2021

ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием боковых липких лент убедитесь в чистоте ваших рук
- При повторном использовании липких лент не клейте их на то же место, где они были приклеены до этого
- Подгузник должен быть заменен, когда индикатор влажности становится незаметным
- Помните, что надевать и снимать подгузник необходимо только сзади, так как это предотвращает случайный перенос бактерий со стороны кишечника
- Чтобы избежать протекания подгузников, следует четко придерживаться всех рекомендаций производителя и лечащего врача
- Самыми частыми причинами протекания являются: ошибки при надевании (несоблюдение инструкции), неверно подобранный размер, неправильный выбор степени впитываемости подгузника.

Рис. 3

СОСТАВ:

Нетканый материал,
Тандекс, термоплавкий клей,
мизителен, целлюлоза, соль
полиакриловой кислоты (САП),
полиэфирное волокно (PET).

СРОК ГОДНОСТИ:

4 года с даты производства
(см. на упаковке).

Дата производства и номер
партии смотрите на упаковке

Количество в упаковке: 30 шт.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ LIVDRY®

Для средней и тяжелой степени недержания. Предназначены для впитывания и удержания мочи и фекальных масс взрослого, используются для ухода за больными; страдающими недержанием, лежачими больными и в других необходимых случаях. Класс средства для впитывания мочи - 4. Используются в домашних условиях и/или медицинских учреждениях. Предназначено для личной гигиены. Для однократного применения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости. Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C – +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха.

LIVDRY

Рис. 4.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ:

1. Расправить все складочки и слегка растянуть изделие.
2. Подгузник расположить между ног.
3. Прижать к телу, расправив возможные складки. Убедиться в том, что барьеры удерживающие жидкость, расположены вовнутрь.
4. Откройте застежки-липучки и прикрепите их на подгузник, симметрично друг напротив друга убедитесь, что подгузник хорошо облегает тело, не имеет складок и перекручиваний.

Снимают подгузник, выполняя вышеназванные действия в обратном порядке. Поверхность кожи больного очищают, обрабатывают, при необходимости наносят крем. Далее надевают новый подгузник согласно пунктам 1 – 4. Использованный подгузник утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЁЖА:

1. Расправить все складочки и слегка растянуть изделие.
2. Лежачего больного перевернуть набок, подложить подгузник со стороны спины под больного, затем перевернуть на спину, а далее на другой бок и обратно на спину.
3. Прижать к телу, расправив возможные складки. Убедиться в том, что барьеры удерживающие жидкость, расположены вовнутрь.
4. Откройте застежки-липучки и прикрепите их на подгузник, симметрично друг напротив друга убедитесь, что подгузник хорошо облегает тело, не имеет складок и перекручиваний.

Снимают подгузник, выполняя вышеназванные действия в обратном порядке. Поверхность кожи больного очищают, обрабатывают, при необходимости наносят крем. Далее надевают новый подгузник согласно пунктам 1 – 4. Использованный подгузник утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

Рис. 5. и Рис. 6. (идентичные)

LIVDRY

Подгузники для взрослых


супер-впитывающие не вызывают аллергии защитные барьеры индикатор влажности

L РАЗМЕР 100 150 CM 30 ШТУК

Рис. 7.



3. Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размеры: M, L - 10 шт./уп.

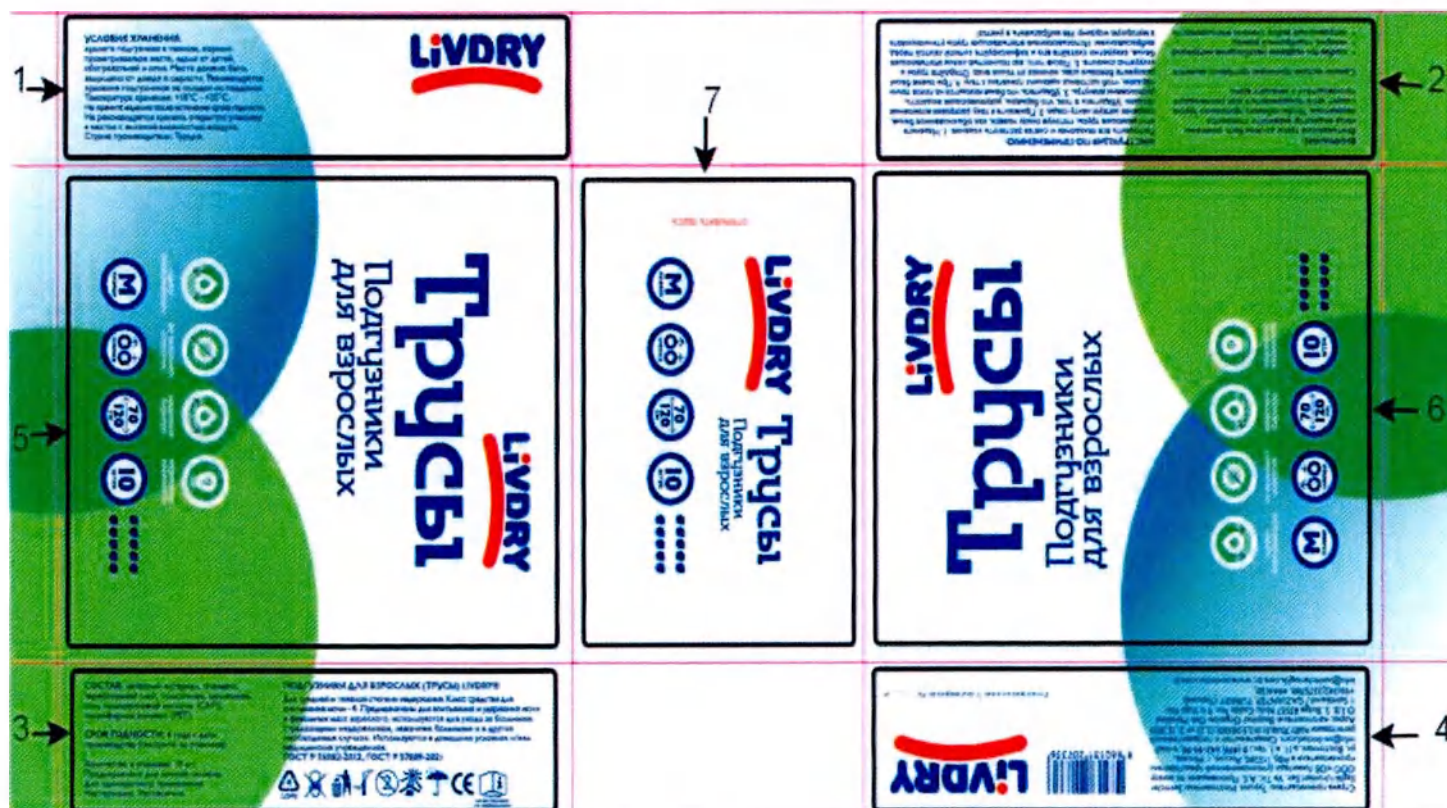

Макет потребительской упаковки:

Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размер: М - 10 шт./уп.

Рис. 1.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости. Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха. Страна производитель: Турция.



Рис. 2.

ВНИМАНИЕ!

Впитывающие трусы должны быть заменены, когда индикатор влажности становится незаметным. Чтобы избежать протекания трусов, следует четко придерживаться всех рекомендаций производителя и лечащего врача.

Самыми частыми причинами протекания являются:

- ошибки при надевании (несоблюдение инструкции);
- неверно подобранный размер;
- неправильный выбор степени впитываемости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Расправить все складочки и слегка растянуть изделие. 1. Наденьте впитывающие трусы, потянув снизу вверх, как обыкновенное белье, сохраняя липкую ленту сзади. 2. Прижмите к телу, расправив возможные складки. Убедитесь в том, что барьеры, удерживающие жидкость, расположены вовнутрь. 3. Убедитесь, что белье находится на поясе таким образом, чтоб ластовица идеально прилегала к телу. 4. При смене белья разорвите боковые швы, начиная от талии вниз. Откройте трусы и аккуратно снимите. 5. После того, как полностью сняли впитывающее белье, аккуратно скатайте его и зафиксируйте липкой лентой перед выбрасыванием. Использованные впитывающие трусы утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

Рис. 3.

СОСТАВ: нетканый материал, спандекс, термоплавкий клей, полиэтилен, целлюлоза, соль полиакриловой кислоты (САП), полиэфирное волокно (РЕТ).

СРОК ГОДНОСТИ: 4 года с даты производства (смотрите на упаковке)

Количество в упаковке: 10 шт.
Предназначено для личной гигиены.
Для однократного применения.
Нестерильно. Нетоксично.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ТРУСЫ) LIVDRY®

Для средней и тяжелой степени недержания. Класс средства для впитывания мочи - 4. Предназначены для впитывания и удержания мочи и фекальных масс взрослого, используются для ухода за больными, страдающими недержанием, лежачими больными и в других необходимых случаях. Используются в домашних условиях и/или медицинских учреждениях.

ГОСТ Р 55082-2012, ГОСТ Р 57889-2021



Рис. 4.

Страна производитель: Турция, Изготовитель: Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S. Произведено по заказу ООО «ОВ Лимитед» (уполномоченный представитель производителя в РФ), 115280, Россия, г. Москва, ул. Восточная, д.11. к.1, тел.: 8 (499) 643-44-90, e-mail: info@ov-limited.com. Свидетельство о государственной регистрации №BY.70.06.01.012.E.003305.12.23 от 21.12.2023. Адрес изготовителя: Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No: 9 Ic Kapi No: 1 Sehirkamil / GAZIANTEP, TURKEY (Турция); +90(342)3375700, 4444150; info@sevinclersaglik.com.tr; www.sevincler.com.tr



LIVDRY

Регистрационное Удостоверение № _____ от _____

Рис. 5. и Рис. 6. (идентичные)



Рис. 7.

Рис. 1.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости. Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха. Страна производитель: Турция.



Рис. 2.

ВНИМАНИЕ!

Впитывающие трусы должны быть заменены, когда индикатор влажности становится незаметным. Чтобы избежать протекания трусов, следует четко придерживаться всех рекомендаций производителя и лечащего врача.

Самыми частыми причинами протекания являются:

- ошибки при надевании (несоблюдение инструкции);
- неверно подобранный размер;
- неправильный выбор степени впитываемости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Расправить все складочки и слегка растянуть изделие. 1. Наденьте впитывающие трусы, потянув снизу вверх, как обыкновенное белье, сохраняя липкую ленту сзади. 2. Прижмите к телу, расправив возможные складки. Убедитесь в том, что барьеры, удерживающие жидкость, расположены вовнутрь. 3. Убедитесь, что белье находится на поясе таким образом, чтоб ластовица идеально прилегала к телу. 4. При смене белья разорвите боковые швы, начиная от талии вниз. Откройте трусы и аккуратно снимите. 5. После того, как полностью сняли впитывающее белье, аккуратно скатайте его и зафиксируйте липкой лентой перед выбрасыванием. Использованные впитывающие трусы утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

Рис. 3.

СОСТАВ: нетканый материал, спандекс, термоплазкий клей, полиэтилен, целлюлоза, соль полиакриловой кислоты (САП), полиэфирное волокно (PET).

СРОК ГОДНОСТИ: 4 года с даты производства (смотрите на упаковке)

Количество в упаковке: 10 шт.
Предназначено для личной гигиены.
Для однократного применения.
Нестерильно. Нетоксично.

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ТРУСЫ) LIVDRY®

Для средней и тяжелой степени недержания. Класс средства для впитывания мочи - 4. Предназначены для впитывания и удержания мочи и фекальных масс взрослого, используются для ухода за больными, страдающими недержанием, лежачими больными и в других необходимых случаях. Используются в домашних условиях и/или медицинских учреждениях. ГОСТ Р 55082-2012, ГОСТ Р 57889-2021



Рис. 4.

Страна производитель: Турция, Изготовитель: Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S. Произведено по заказу ООО «ОВ Лимитед» (уполномоченный представитель производителя в РФ), 115280, Россия, г. Москва, ул. Восточная, д.11. к.1, тел.: 8 (499) 643-44-90, e-mail: info@ov-limited.com. Свидетельство о государственной регистрации №BY.70.06.01.012.E.003305.12.23 от 21.12.2023 Адрес изготовителя: Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No: 9 Ic Kapi No: 1 Sehitkamil / GAZIANTER, TURKEY (Турция); +90(342)3375700, 4444150; info@sevincclersaglik.com.tr; www.sevinccler.com.tr

Регистрационное Удостоверение № _____ от _____

Рис. 5. и Рис. 6. (идентичные)

Трусы

Подгузники для взрослых

супер-впитывающие

не вызывают аллергии

защитные барьеры

индикатор влажности


РАЗМЕР

UNISEX

100
150
CM

10
ШТУК

Рис. 7.

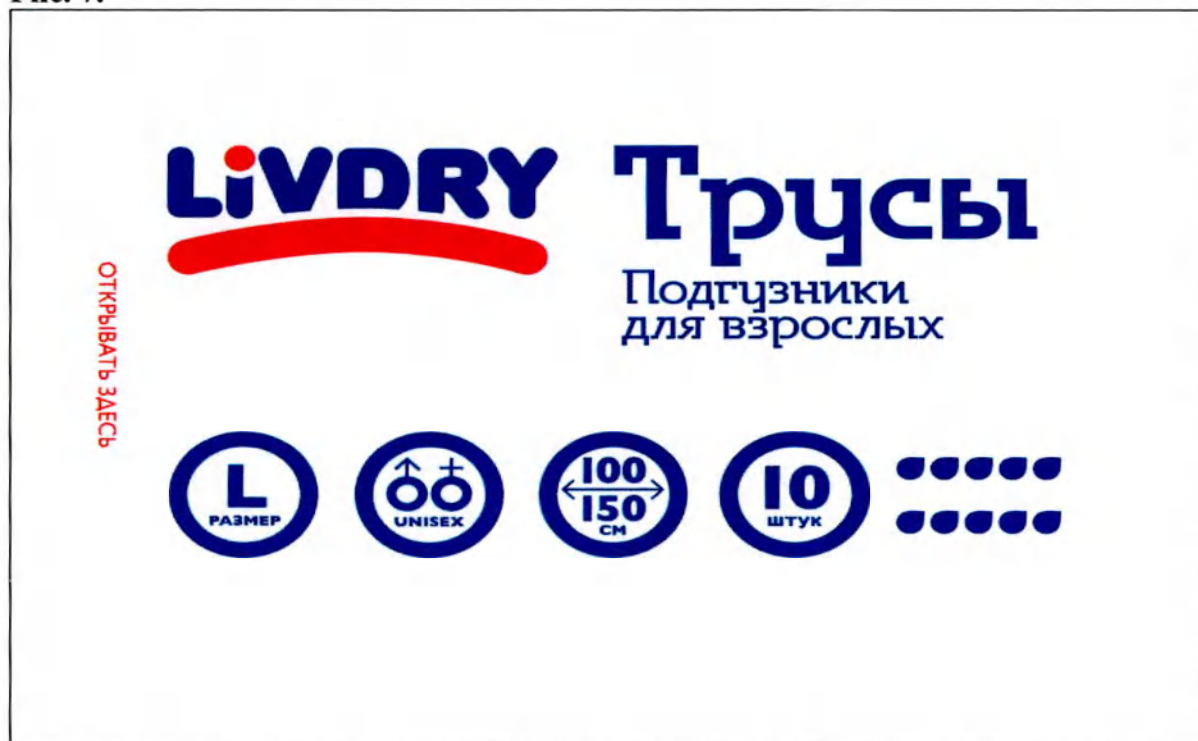

4. Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размеры: M, L - 30 шт./уп.



Макет потребительской упаковки:

Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размер: М - 30 шт./уп.

Рис. 1.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости. Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха. Страна производитель: Турция.



Рис. 2.

ВНИМАНИЕ!

Впитывающие трусы должны быть заменены, когда индикатор влажности становится незаметным.

Чтобы избежать протекания трусов, следует четко придерживаться всех рекомендаций производителя и лечащего врача.

Самыми частыми причинами протекания являются:

- ошибки при надевании (несоблюдение инструкции);
- неверно подобранный размер;
- неправильный выбор степени впитываемости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Расправьте все складочки и слегка растянуть изделие

1. Наденьте впитывающие трусы, потянув снизу вверх, как обыкновенное белье, сохраняя липкую ленту сзади
2. Прижмите к телу, расправив возможные складки. Убедитесь в том, что барьеры, удерживающие жидкость, расположены вовнутрь.
3. Убедитесь, что белье находится на поясе таким образом, чтоб ластовица идеально прилегала к телу.

4. При смене белья разорвите боковые швы, начиная от талии вниз. Откройте трусы и аккуратно снимите.
5. После того, как полностью сняли впитывающее белье, аккуратно скатайте его и зафиксируйте липкой лентой перед выбрасыванием.

Использованные впитывающие трусы утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

Рис. 3.



СОСТАВ: нетканый материал, спандекс, термоплавкий клей, полиэтилен, целлюлоза, соль полиакриловой кислоты (САП), полиэфирное волокно (PET).

Количество в упаковке: 30 шт.
Предназначено для личной гигиены
Для однократного применения
Нестерильно
Нетоксично

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ТРУСЫ) LIVDRY®

Для средней и тяжелой степени недержания.
Класс средства для впитывания мочи - 4.
Предназначены для впитывания и удержания мочи и фекальных масс взрослого, используются для ухода за больными, страдающими недержанием, лежачими больными и в других необходимых случаях. Используются в домашних условиях и/или медицинских учреждениях.
ГОСТ Р 55082-2012, ГОСТ Р 57889-2021

Рис. 4.

Страна производитель: Турция, Изготовитель: Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S. Произведено по заказу ООО «ОВ Лимитед» (уполномоченный представитель производителя в РФ), 115280, Россия, г. Москва, ул. Восточная, д.11. к.1, тел.: 8 (499) 643-44-90, e-mail: info@ov-limited.com. Свидетельство о государственной регистрации №BY.70.06.01.012.E.003305.12.23 от 21.12.2023
Адрес изготовителя: Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No: 9 Ic Kapi No: 1 Sehitkamil / GAZIANTEP, TURKEY (Турция); +90(342)3375700, 4444150; info@sevinclersaglik.com.tr; www.sevincler.com.tr

СРОК ГОДНОСТИ:
4 года с даты производства
(смотрите на упаковке)

Регистрационное Удостоверение
№ _____ от _____




Рис. 5. и Рис. 6. (идентичные)



Рис. 7.

Рис. 7.



Макет потребительской упаковки:

Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размер: L - 30 шт./уп.



Рис. 1.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости. Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха. Страна производитель: Турция.



Рис. 2.

ВНИМАНИЕ!

Впитывающие трусы должны быть заменены, когда индикатор влажности становится незаметным.

Чтобы избежать протекания трусов, следует четко придерживаться всех рекомендаций производителя и лечащего врача.

Самыми частыми причинами протекания являются:

- ошибки при надевании (несоблюдение инструкции);
- неверно подобранный размер;
- неправильный выбор степени впитываемости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:


Расправить все складочки и слегка растянуть изделие

1. Наденьте впитывающие трусы, потянув снизу вверх, как обыкновенное белье, сохраняя липкую ленту сзади
2. Прижмите к телу, расправив возможные складки. Убедитесь в том, что барьеры, удерживающие жидкость, расположены вовнутрь.
3. Убедитесь, что белье находится на поясе таким образом, чтоб ластовица идеально прилегала к телу.

4. При смене белья разорвите боковые швы, начиная от талии вниз. Откройте трусы и аккуратно снимите.
5. После того, как полностью сняли впитывающее белье, аккуратно скатайте его и зафиксируйте липкой лентой перед выбрасыванием.

Использованные впитывающие трусы утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

Рис. 3.

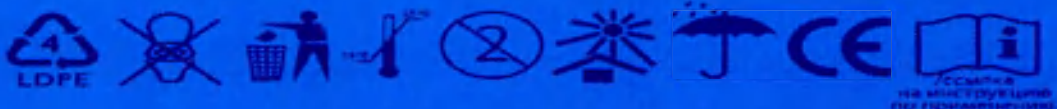

СОСТАВ: нетканый материал, спандекс, термоплавкий клей, полиэтилен, целлюлоза, соль полиакриловой кислоты (САП), полиэфирное волокно (PET).

Количество в упаковке: 30 шт.
Предназначено для личной гигиены
Для однократного применения
Нестерильно
Нетоксично

ПОДГУЗНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ТРУСЫ) LIVDRY®

Для средней и тяжелой степени недержания.
Класс средства для впитывания мочи - 4.

Предназначены для впитывания и удержания мочи и фекальных масс взрослого, используются для ухода за больными, страдающими недержанием, лежачими больными и в других необходимых случаях. Используются в домашних условиях и/или медицинских учреждениях.

ГОСТ Р 55082-2012, ГОСТ Р 57889-2021

Рис. 4.

Страна производитель: Турция, Изготовитель: Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S. Произведено по заказу ООО «ОВ Лимитед» (уполномоченный представитель производителя в РФ), 115280, Россия, г. Москва, ул. Восточная, д.11. к.1, тел.: 8 (499) 643-44-90, e-mail: info@ov-limited.com. Свидетельство о государственной регистрации №BY.70.06.01.012.E.003305.12.23 от 21.12.2023
Адрес изготовителя: Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No: 9 Ic Kapi No: 1 Sehirkamil / GAZIANTER, TURKEY (Турция);
+90(342)3375700, 4444150;
info@sevincilersaglik.com.tr; www.sevincler.com.tr

СРОК ГОДНОСТИ:

4 года с даты производства
(смотрите на упаковке)

Регистрационное Удостоверение

№ _____ от _____



8 680131 207343

LIV DRY

Рис. 5. и Рис. 6. (идентичные)

LIVDRY

Трусы

Подгузники
для взрослых



супер-
впитывающие



не вызывают
аллергии



защитные
барьеры



индикатор
влажности



Рис. 7.



2. Маркировка транспортной упаковки

На маркировке транспортной упаковки (мешка-пакета) медицинского изделия указывают:

- наименование медицинского изделия;
- вариант исполнения;
- наименование и адрес изготовителя, контактные данные изготовителя;
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения;
- условия хранения и транспортирования;
- количество в упаковке;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- манипуляционные символы «Беречь от влаги», «Не допускать воздействия солнечного цвета»;
- информацию об уполномоченном представителе производителя на территории РФ и его контактную информацию;
- дата производства;
- номер партии (лот);
- срок годности;
- габаритные размеры и масса;

Макеты транспортной упаковки на примере варианта исполнения:

1. Подгузники для взрослых LIVDRY®, размеры: M, L - 10 шт./уп.

Макет на размер M, 10 шт./уп.

Подгузники для взрослых LIVDRY® (Регистрационное удостоверение № _____ от _____ года) I. Вариант исполнения: Подгузники для взрослых LIVDRY®, размер: M - 10 шт./уп.,

II. Инструкция по применению 1 шт.

Количество упаковок внутри: 6 упаковок.



Габаритный размер:

Масса:

Условия транспортировки: Транспорт должен быть чистым, сухим, без запаха.

Транспортировка производится на поддонах или без них. Температура внутри транспорта должна быть от -10°C до +25°C.

Условия хранения: храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости.

Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха.

Изготовитель (производитель): Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S., Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZIANTEP / TURKEY (Турция); Тел.: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «ОВ Лимитед» (ООО «ОВ Лимитед»), 115280, город Москва, улица Восточная, д.11, корпус 1; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com

Дата производства:

Номер партии (лот):

Срок годности:



Макет на размер L, 10 шт./уп.

Подгузники для взрослых LIVDRY®

(Регистрационное удостоверение № _____ от _____ года)

I. Вариант исполнения: Подгузники для взрослых LIVDRY®, размер: L – 10 шт./уп.,

II. Инструкция по применению 1 шт.

Количество упаковок внутри: 6 упаковок.



Габаритный размер:

Масса:

Условия транспортировки: Транспорт должен быть чистым, сухим, без запаха.

Транспортировка производится на поддонах или без них. Температура внутри транспорта должна быть от -10°C до +25°C.

Условия хранения: храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости.

Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха.

Изготовитель (производитель): Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S., Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZIANTEP / TURKEY (Турция); Тел.: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «ОВ Лимитед» (ООО «ОВ Лимитед»), 115280, город Москва, улица Восточная, д.11, корпус 1; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com

Дата производства:
Номер партии (лот):
Срок годности:



Макеты транспортной упаковки на примере варианта исполнения:

2. Подгузники для взрослых LIVDRY®, размеры: M, L – 30 шт./уп.

Макет на размер: M, 30 шт./уп.

Подгузники для взрослых LIVDRY®

(Регистрационное удостоверение № _____ от _____ года)

I. Вариант исполнения: Подгузники для взрослых LIVDRY®, размер: M – 30 шт./уп.,

II. Инструкция по применению 1 шт.

Количество упаковок внутри: 4 упаковок.



Габаритный размер:

Масса:

Условия транспортировки: Транспорт должен быть чистым, сухим, без запаха.

Транспортировка производится на поддонах или без них. Температура внутри транспорта должна быть от -10°C до +25°C.

Условия хранения: храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости.

Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха.

Изготовитель (производитель): Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S., Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZIANTEP / TURKEY (Турция); Тел.: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «ОВ Лимитед» (ООО «ОВ Лимитед»), 115280, город Москва, улица Восточная, д.11, корпус 1; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com

Дата производства:
Номер партии (лот):
Срок годности:



Макет на размер: L, 30 шт./уп

Подгузники для взрослых LIVDRY®

(Регистрационное удостоверение № _____ от _____ года)

I. Вариант исполнения: Подгузники для взрослых LIVDRY®, размер: L - 30 шт./уп.,

II. Инструкция по применению 1 шт.

Количество упаковок внутри: 4 упаковок.



Габаритный размер:

Масса:

Условия транспортировки: Транспорт должен быть чистым, сухим, без запаха.

Транспортировка производится на поддонах или без них. Температура внутри транспорта должна быть от -10°C до +25°C.

Условия хранения: храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали

от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости. Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха.

Изготовитель (производитель): Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S., Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZIANTEP / TURKEY (Турция); Тел.: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «ОВ Лимитед» (ООО «ОВ Лимитед»), 115280, город Москва, улица Восточная, д.11, корпус 1; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com

Дата производства:
Номер партии (лот):
Срок годности:



Макет транспортной упаковки на примере варианта исполнения:

3. Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размеры: M, L - 10 шт./уп.

Макет на размер: M, 10 шт./уп.

Подгузники для взрослых LIVDRY®

(Регистрационное удостоверение № _____ от _____ года)

I. Вариант исполнения:

Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размер: M, - 10 шт./уп.,

II. Инструкция по применению 1 шт.

Количество упаковок внутри: 8 упаковок.

Габаритный размер:

Масса:



Условия транспортировки: Транспорт должен быть чистым, сухим, без запаха.

Транспортировка производится на поддонах или без них. Температура внутри транспорта должна быть от -10°C до +25°C.

Условия хранения: храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости.

Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха.

Изготовитель (производитель): Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S., Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZIANTEP / TURKEY (Турция); Тел.: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «ОВ Лимитед» (ООО «ОВ Лимитед»), 115280, город Москва, улица Восточная, д.11, корпус 1; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com

Дата производства:
Номер партии (лот):
Срок годности:



Макет на размер: L, 10 шт./уп.

Подгузники для взрослых LIVDRY®

(Регистрационное удостоверение № _____ от _____ года)

I. Вариант исполнения: Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размер: L, - 10 шт./уп.,

II. Инструкция по применению 1 шт.

Количество упаковок внутри: 8 упаковок.

Габаритный размер:

Масса:

Условия транспортировки: Транспорт должен быть чистым, сухим, без запаха.

Транспортировка производится на поддонах или без них. Температура внутри транспорта должна быть от -10°C до +25°C.

Условия хранения: храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости.

Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха.

Изготовитель (производитель): Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S., Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZIANTEP / TURKEY (Турция); Тел.: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «ОВ Лимитед» (ООО «ОВ Лимитед»), 115280, город Москва, улица Восточная, д.11, корпус 1; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com

Дата производства:

Номер партии (лот):

Срок годности:



Макет транспортной упаковки на примере варианта исполнения:

4. Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размеры: M, L - 30 шт./уп.

Макет на размер: M, 30 шт./уп.

Подгузники для взрослых LIVDRY®

(Регистрационное удостоверение № _____ от _____ года)

I. Вариант исполнения: Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размер: M, - 30 шт./уп.,

II. Инструкция по применению 1 шт.

Количество упаковок внутри: 4 упаковок.

Габаритный размер:

Масса:

Условия транспортировки: Транспорт должен быть чистым, сухим, без запаха.

Транспортировка производится на поддонах или без них. Температура внутри транспорта должна быть от -10°C до +25°C.

Условия хранения: храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости.

Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха.

Изготовитель (производитель): Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S., Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZIANTEP / TURKEY (Турция); Тел.: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.



Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «ОВ Лимитед» (ООО «ОВ Лимитед»), 115280, город Москва, улица Восточная, д.11, корпус 1; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com

Дата производства:
Номер партии (лот):
Срок годности:



Макет на размер: L, 30 шт./уп.

Подгузники для взрослых LIVDRY®

(Регистрационное удостоверение № _____ от _____ года)

I. Вариант исполнения: Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®, размер: L, - 30 шт./уп.,

II. Инструкция по применению 1 шт.

Количество упаковок внутри: 4 упаковок.



Габаритный размер:

Масса:

Условия транспортировки: Транспорт должен быть чистым, сухим, без запаха.

Транспортировка производится на поддонах или без них. Температура внутри транспорта должна быть от -10°C до +25°C.

Условия хранения: храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости.

Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах. Температура хранения: +18°C - +25°C. Не храните изделие после истечения срока годности. Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха.

Изготовитель (производитель): Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S., Baspinar Organize Osb Mahallesi O.S.B. 5. Bolge 83557 Nolu Cadde No:9 İç Kapi No:1 Şehitkamil / GAZIANTEP / TURKEY (Турция); Тел.: +90(342) 444 4 150; +90(342) 337 57 00.

Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «ОВ Лимитед» (ООО «ОВ Лимитед»), 115280, город Москва, улица Восточная, д.11, корпус 1; +7 (499) 643-44-90; +7 (916) 607-00-00; info@ov-limited.com

Дата производства:
Номер партии (лот):
Срок годности:



Символы и обозначения, указанные на потребительской упаковке:

Вид символа и обозначения	Описание
	Обратитесь к инструкции по применению
	Соответствие Европейской экономической зоне
	Беречь от влаги
	Не допускать воздействия солнечного цвета
	Запрет на повторное применение

	Предел температуры
	Утилизировать в мусорную урну
	Запрет на утилизацию через канализационную систему
	Полиэтилен низкой плотности (высокого давления)
	Размер подгузника
	Размер подгузника
	Применим для мужчин и женщин
	Диапазон обхвата талии
	Диапазон обхвата талии
	Диапазон обхвата талии
	Количество подгузников в упаковке
	Количество подгузников в упаковке
	Степень впитываемости в виде изображения капель
	Супер-впитывающие
	Не вызывают аллергии
	Наличие защитных барьеров
	Наличие индикатора влажности
Ссылка	/ссылка на инструкцию по применению/

Символы и обозначения, указанные на транспортной упаковке:

Вид символа и обозначения	Описание
	Обратитесь к инструкции по применению
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги

УПАКОВКА

1. Потребительская групповая упаковка (пачка)

Подгузники в количестве, определяемом производителем:

– Подгузники для взрослых LIVDRY®, размеры:

М – 10/30 шт., L – 10/30 шт.

– Подгузники для взрослых (труссы) LIVDRY®, размеры:

М – 10/30 шт., L – 10/30 шт.

упаковываются в пачки из полиэтилена низкой плотности (высокого давления), обеспечивающие их сохранность при транспортировании и хранении.

Материал: полиэтилен низкой плотности (высокого давления), марка АКМ (производитель АКМ Karton ve Plastik Ambalaj San. Tic A.Ş., страна Турция).

Параметры потребительской упаковки:

Наименование	Кол-во шт. в упаковке	Размер	Габаритные размеры, мм ($\pm 10\%$)	Масса (вместе с изделием), г ($\pm 10\%$)
Подгузники для взрослых LIVDRY®	10 шт./уп.	М	250x180x150	800
		L	290x180x160	950
	30 шт./уп.	М	165x440x260	2300
		L	183x440x280	2700
Подгузники для взрослых (труссы) LIVDRY®	10 шт./уп.	М	210x200x120	700
		L	230x200x130	800
	30 шт./уп.	М	140x430x250	2000
		L	155x460x260	2200

2. Транспортная упаковка

Подгузники транспортируются в мешках-пакетах из полиэтилена низкой плотности высокого давления. Количество единиц потребительских групповых упаковок (пачек) внутри в соответствии с таблицей ниже.

Материал: Полиэтилен низкой плотности высокого давления, марка KIMPACK (производитель ABY Plastik Ambalaj ve Enerji Sanayi Ticaret A.Ş., страна Турция).

Наименование	Кол-во шт. в упаковке	Количество потребительских групповых упаковок (пачек)	Размер	Габаритные размеры, мм ($\pm 10\%$)	Масса (вместе с изделием), г ($\pm 10\%$)
Подгузники для взрослых LIVDRY®	10 шт./уп.	6 упаковок	M	530x300x230	4990
			L	470x380x270	5700
	30 шт./уп.	4 упаковки	M	660x440x260	9200
			L	730x440x280	10700
Подгузники для взрослых (трусы) LIVDRY®	10 шт./уп.	8 упаковок	M	480x380x200	5500
			L	490x380x200	6200
	30 шт./уп.	4 упаковки	M	560x430x250	7900
			L	620x460x260	8900

Упаковка, в которой отгружаются изделия, соответствует установленным стандартам и обеспечивает, при условии надлежащего обращения с грузом, его сохранность во время транспортировки различными видами наземного, морского транспорта, перевалок, хранения и правильного осуществления погрузочно-разгрузочных работ.

Продолжительность контакта с телом человека:

Контакт с неповрежденной кожей.

Длительность – кратковременный, менее 24 часов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Эксплуатационные свойства подгузников для взрослых LIVDRY®:

Показатель	Значение	
Размер	M	L
Масса изделия (г)	77 ($\pm 5\%$)	89 ($\pm 5\%$)
Впитываемость (мл)	не менее 2000	не менее 2300
Сорбционная способность после центрифугирования (г)	не менее 433	не менее 547
Скорость впитывания ($\text{см}^3/\text{с}$)	не менее 3,20	не менее 3,21
Обратная сорбция (г)	не более 0,1	не более 0,12
Время впитывания 100 см^3 0,9 %-ного раствора хлористого натрия (с)	После 1-го вливания — 150 После 2-го вливания — 250	
pH экстракта	5,5-7,0	

Эксплуатационные свойства подгузников для взрослых (трусы) LIVDRY®:

Показатель	Значение	
Размер	M	L
Масса изделия (г)	69 ($\pm 5\%$)	77 ($\pm 5\%$)
Впитываемость (мл)	не менее 2000	не менее 2300
Сорбционная способность после центрифугирования (г)	не менее 440	не менее 500
Скорость впитывания ($\text{см}^3/\text{с}$)	не менее 3,23	не менее 3,22

Обратная сорбция (г)	не более 0,17	не более 0,19
Время впитывания 100 см ³ 0,9 %-ного раствора хлористого натрия (с)	После 1-го вливания — 150 После 2-го вливания — 250	
рН экстракта	5,5-7,0	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применение в положении стоя:

1. Расправить все складочки и слегка растянуть изделие
2. Подгузник расположить между ног
3. Прижать к телу, расправив возможные складки. Убедитесь в том, что барьеры, удерживающие жидкость, расположены вовнутрь.
4. Откройте застежки-липучки и прикрепите их на подгузник, симметрично друг напротив друга. Убедитесь, что подгузник хорошо облегает тело, не имеет складок и перекручиваний.

Снимают подгузник, выполняя вышеназванные действия в обратном порядке.

Поверхность кожи больного очищают, обрабатывают, при необходимости наносят крем. Далее надевают новый подгузник согласно пунктам 1-4.

Использованный подгузник утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

Применение в положении лежа:

1. Расправить все складочки и слегка растянуть изделие
2. Лежачего больного перевернуть набок, подложить подгузник со стороны спины под больного, затем перевернуть на спину, а далее на другой бок и обратно на спину
3. Прижать к телу, расправив возможные складки. Убедитесь в том, что барьеры, удерживающие жидкость, расположены вовнутрь.
4. Откройте застежки-липучки и прикрепите их на подгузник, симметрично друг напротив друга. Убедитесь, что подгузник хорошо облегает тело, не имеет складок и перекручиваний

Снимают подгузник, выполняя вышеназванные действия в обратном порядке.

Поверхность кожи больного очищают, обрабатывают, при необходимости наносят крем. Далее надевают новый подгузник согласно пунктам 1-4

Использованный подгузник утилизировать в мусорную корзину. Не выбрасывать в унитаз!

ВНИМАНИЕ!

- Перед использованием боковых липких лент убедитесь в чистоте Ваших рук.
- При повторном использовании липких лент не клейте их на то же место, где они были приклеены до этого
- Подгузник должен быть заменен, когда индикатор влажности становится незаметным
- Помните, что надевать и снимать подгузник необходимо только сзади, так как это предотвращает случайный перенос бактерий со стороны кишечника.

- Чтобы избежать протекания памперсов, следует четко придерживаться всех рекомендаций производителя и лечащего врача.
- Самыми частыми причинами протекания являются:
 - ошибки при надевании (несоблюдение рекомендаций по применению);
 - неверно подобранный размер;

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Медицинские изделия полностью соответствуют следующим требованиям:

- Изделия соответствуют всем сертификатам и директивам, которые являются обязательными на территории Российской Федерации и на территории Евразийского таможенного союза.
- В подгузниках не допускаются внешние дефекты — механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т. п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.
- Печатное изображение на подгузниках четкое, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выпципывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.
- Конструкция подгузника, линейные размеры, техническое и декоративное исполнение указываются в технической документации на конкретные подгузники или возрастную группу.
- Изделия не имеют сильно выраженного химического запаха.
- Изделия не содержат в себе каких-либо токсических элементов, использование которых может неблагоприятно сказаться на здоровье человека.

Для безопасного использования изделия рекомендуется следовать следующим правилам:

- 1) Использованные подгузники не выбрасывать в канализацию.
- 2) Не использовать изделия с дефектом, либо с нарушенной целостностью упаковки.
- 3) Не хранить подгузники вблизи к открытому огню.
- 4) Использовать изделия в соответствии с инструкцией.
- 5) При необходимости, менять подгузник на новый.
- 6) Не использовать подгузники после истечения срока годности.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В процессе производства, все отходы выбрасываются в соответствии с государственными нормами. При производстве подгузников не образуются опасные химические отходы, единственными отходами компании являются отходы сырья либо готовой продукции, выполненной не в соответствии со спецификациями. Данные виды отходов сортируются и отправляются на вторичную обработку.

При производстве изделий не используется вода, поэтому не образуются сточные воды. Также при производстве изделий не образуются газообразные отходы, поэтому нет воздействия на окружающую среду.

Для сохранения окружающей среды, выбрасывайте использованные подгузники не в канализацию, а в соответствующе отсортированный мусорный бак.

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Изделие принимается при следующих условиях:

1. При соблюдении необходимого количества
2. Упаковка неповрежденная, чистая
3. Срок годности товара еще не истек
4. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски;
5. Следующие визуальные дефекты недопустимы:
 - a. механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т. п.),
 - b. пятна различного происхождения,
 - c. посторонние включения, видимые невооруженным глазом

МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ

Система управления качеством состоит из несколько этапов:

1. Физический тест, выполняемый автоматически машиной. Полностью автоматизированное производство подгузников включает себя автоматическую проверку каждого подгузника на его физические свойства, на наличие всех деталей. При нахождении брака, машина отправляет поврежденный подгузник в отдельную камеру, препятствуя его дальнейшему попаданию в общую партию.
2. Для проверки машины на предупаковочном этапе сотрудники отдела контроля качества каждый день, в течении всего периода работы линии, вручную проверяют подгузники, вытаскивая их случайным образом из партии, производя контроль внешнего вида подгузника, его линейные показатели, особенности обработки сырья, структуру подгузника. Как только один подгузник проверен, сотрудник отдела контроля качества берет следующий подгузник на проверку.
3. Каждый час отдел контроля качества выбирает из новой партии случайную упаковку, для проведения следующих тестов в лабораторных условиях:
 - a. Тест на дистрибуцию – проверяются материалы, используемые для производства основной впитывающей части подгузника.
 - b. Тест на скорость впитывания – проверка насколько быстро подгузники данной партии способны впитывать влагу.
 - c. Тест на обратную сорбцию – на полностью заполненный подгузник ложится впитывающая салфетка, и измеряется, сколько жидкости подгузник отдает обратно. Чем меньше данный показатель, тем лучше, ведь это значит, что кожа человека даже при полном подгузнике будет оставаться сухой.
 - d. Тест на максимальную впитываемость – 2 подгузника кладут на пол часа в полностью заполненные жидкостью аквариумы. Разница в массе подгузника до и после аквариума и есть максимальная возможность впитывания.
 - e. Тест на сорбционную способность после центрифугирования – после предыдущего теста на впитываемость, подгузники помещают в центрифугу для отжима излишней влаги. Жидкость, которая оказалась в подгузнике после этого теста и составляет максимальную возможность подгузника удерживать её в себе.

Подробнее с показателями данных тестов можно ознакомиться в разделе Эксплуатационные свойства.

На основании результатов проведенных тестов, в случае соответствия показателей принятым на предприятии нормам, партия готова к дальнейшей продаже.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Условия эксплуатации

Предназначено для эксплуатации при температуре от +4°C до +35°C и влажности до 80% без конденсации (при 25°C).

Условия транспортировки:

1. Транспорт должен быть чистым, сухим, без запаха.
2. Транспортировка производится на поддонах или без них.
3. Температура внутри транспорта должна быть от -10°C до +25°C.

Условия хранения

Храните подгузники в темном, хорошо проветриваемом месте, вдали от детей, обогревателей и огня. Место должно быть защищено от дождя и сырости. Рекомендуется хранение подгузников на складах на поддонах.

Температура хранения: +18°C - +25°C

Не храните изделие после истечения срока годности.

Не рекомендуется хранить открытую упаковку в местах с высокой влажностью воздуха.

Утилизация

Требования для утилизации в лечебно-профилактических учреждениях.

Утилизация изделий с истекшим сроком годности или с поврежденной упаковкой, производится по СанПиН 2.1.3684-21 как медицинские отходы, принадлежащие к классу «А», любым методом, предотвращающим их использование.

Отходы, образующиеся в результате использования изделий, относятся к медицинским отходам в соответствии со ст. 49 Федерального Закона № 323 – ФЗ от 21.11.2011 г. «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» и должны быть утилизированы в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», класс Б (эпидемиологически опасные отходы).

Требования для утилизации в домашних условиях.

Утилизация использованных и невскрытых изделий, после окончания срока годности, необходимо утилизировать в домашних условиях как бытовые отходы.

Строго запрещается выбрасывать использованные подгузники в канализацию.

После использования подгузника, поместите его в закрывающуюся емкость, дабы избежать распространения микроорганизмов и неприятных запахов, привлекающих насекомых.

Не храните использованные подгузники дома долгое время. Рекомендуется использовать специальные антибактериальные контейнеры для хранения использованных подгузников дома.

ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантийные обязательства

Исключительно в случае правильной транспортировки, хранения и использования производитель гарантирует, что качество изделий будет соответствовать сертификатам производителя в течение 4 (четырёх) лет с даты производства.

Рекламация

По вопросам качества, рекламаций и применения медицинского изделия «Подгузники для взрослых LIVDRY®» обращаться к уполномоченному представителю производителя в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «ОВ Лимитед»
115280, город Москва, улица Восточная, д.11, корпус 1

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ

TS EN 46003	Системы менеджмента качества. Медицинские изделия. Особые требования к применению EN ISO 9003
ISO 11948-1:1996	Подгузники для взрослых. Часть 1. Испытания изделия целиком

ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ РФ

ГОСТ Р 55082-2012	Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия
ГОСТ Р 57889-2021	Средства для впитывания мочи для ношения на теле человека. Общие технические условия
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
ГОСТ Р МЭК 62366-1-2023	Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности
ГОСТ 31214-2016	Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, предоставляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность
ГОСТ Р 52770-2023	Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска
ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2. Требования к обращению с животными
ГОСТ ISO 10993-5-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитотоксичность: методы in vitro
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия
ГОСТ ISO 10993-12-2015	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РФ**

Общество с ограниченной ответственностью «ОВ Лимитед»

115280, город Москва, улица Восточная, д.11, корпус 1

Тел.: 8 (499) 643-44-90

e-mail: info@ov-limited.com

Штамп: № 24878

СЕВИНЧЛЕР САГЛЫК УРЮНЛЕРИ САН. ВЕ ТИДЖ. А. Ш.

Генеральный Директор

ЯСИН СЕВИНЧ

/Штамп: СЕВИНЧЛЕР САГЛЫК УРЮНЛЕРИ
САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ
(SEVINÇLER SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ)
РАЙОН (ОРГАНИЗОВАННЫЙ) ПРОМЗОН
БАШПЫНАР ОСВ, 5-Й УЧАСТОК, ПРОСПЕКТ №
83557, № 9, ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ №1
ШЕХИТКАМИЛЬ/ГАЗИАНТЕП
Тел: 444 4 150- Т: 0 (342) 337-57-00) –Ф: (342) 337 57 04
Налоговая инспекция Шехиткамель: 776 065 0977
www.sevincler.com.tr/

10.09.2024

Производство СЕВИНЧЛЕР САГЛЫК УРЮНЛЕРИ САН. ВЕ ТИДЖ. А. Ш., Турция

/Штамп: 11-я НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ГАЗИАНТЕПА

* ИРФАН ЭРЕН ГЮНЕШ/

/Штамп: Копия
соответствует оригиналу/

/Штамп: 11-я
НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
ГАЗИАНТЕПА
СЕКРЕТАРЬ С ПРАВОМ
ПОДПИСИ
* АЛИ АЛТУНАТМАЗ/

/Круглая гербовая печать:
ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА *
11-я НОТАРИАЛЬНАЯ
КОНТОРА
ГАЗИАНТЕПА/подписано/

Штамп 12.09.2024

*/Круглая гербовая печать: ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА **

11-я НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ГАЗИАНТЕПА/подписано/

Перевод данного текста выполнен мной, переводчиком Исингалиевой Динарой Аркадьевной.

Российская Федерация

Город Москва

Восемнадцатого сентября две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Исингалиевой Динары Аркадьевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2024- 58-1877

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



[Handwritten signature]

Ф.А. Квитко

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 102 лист(а)(ов)

Нотариус

[Handwritten signature]

