


Инструкция по настройке слуховых аппаратов «Аурика»

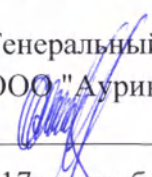

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор
ООО «Аурика»

 М.В. Мурзинов

«17» сентября 2020 г.

Разработал:

Главный конструктор ООО
«Аурика»

 С.В.Костенко
«17» сентября 2020 г.

Инструкция по доработке является интеллектуальной собственностью Общества с ограниченной ответственностью «Аурика». Сведения, содержащиеся в указанном документе, носят конфиденциальный характер, не подлежат разглашению третьим лицам. Указанный документ предназначен для внутреннего пользования и не подлежит выносу за территорию предприятия

Версия 2

Содержание

1. Системные требования.	3
2. Установка ПО на компьютер	3
3. Аксессуары для программирования	4
4. Установка Hi-Pro	5
5. Подключение СА.....	14
6. Подбор СА.....	15
7. Настройка программируемых СА во врачебной программе	18
8. Настройка триммерно-программируемых СА.....	27
9. Дополнительные функции	29
10. Техническая поддержка.	31

1. Системные требования.

Для возможности настройки слуховых аппаратов (СА) Аурика необходимо дополнительное оборудование, стационарный персональный компьютер (ПК) или ноутбук, с требованиями, указанными в таблице 1:

Таблица 1

Системные требования	Минимальные	Рекомендуемые
Процессор/тактовая частота	Pentium III, 1 ГГц или аналог	Pentium IV, 2 ГГц или выше
Оперативная память	512 Мб	2 Гб или выше
Минимальное свободное дисковое пространство	1 Гб	1 Гб или выше
Операционная система	Windows 7 (Home), Windows Vista (Home), Windows XP (Home, SP2), Windows 2000 (SP4)	Windows 7 или выше
	Windows 7 и Vista также 64-разрядная ОС	Windows 7 и Vista также 64-разрядная ОС
	ПО Аурика (версия 1.0.4...)	ПО Аурика (версия 1.0.4...)
Разрешение экрана	1024 x 768	1024 x 768
CD-дисковод	-	требуется
USB-порт	Один для каждого устройства:	Один для каждого устройства:
Программатор	HI-Pro USB	HI-Pro 2 USB
База пациентов		Noah 4
Врачебная программа	См. Таблица 2	См. Таблица 2

2. Установка ПО на компьютер


- Установите компакт-диск (CD) с программой в CD привод компьютера.
- Запустите файл-инсталлятор install.exe.
- Для Windows Vista/ 7: установка программы должна быть выполнена через «Запуск от имени администратора»;
- Пройдите процедуру установки программы.

Примечание. Программа может быть установлена с любого носителя, в том числе, скаченная с сайта производителя www.aurica.ru.

3. Аксессуары для программирования

Аксессуары для программирования приведены в таблице 3.

Таблица 3

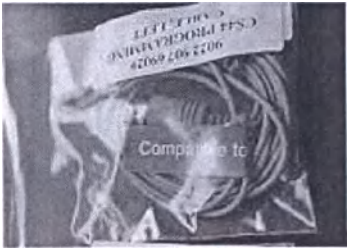
Слуховой аппарат	Аксессуар
Шнур программирования, Левый	
Шнур программирования, Правый	
Каблучок для программирования	
Адаптер	

4. Установка Hi-Pro


4.1 Подключите Hi-Pro к свободному USB разьему компьютера. Не рекомендуется использовать разъемы USB, находящиеся на передней части компьютера.




4.2 Вставьте диск с драйверами Hi-Pro в CD/DVD привод, программа установки запустится автоматически. Если этого не произошло, кликните мышкой на ярлыке CD/DVD привода, как показано на рисунке (при установке на Windows 7 и выше – необходимо произвести установку от имени администратора).

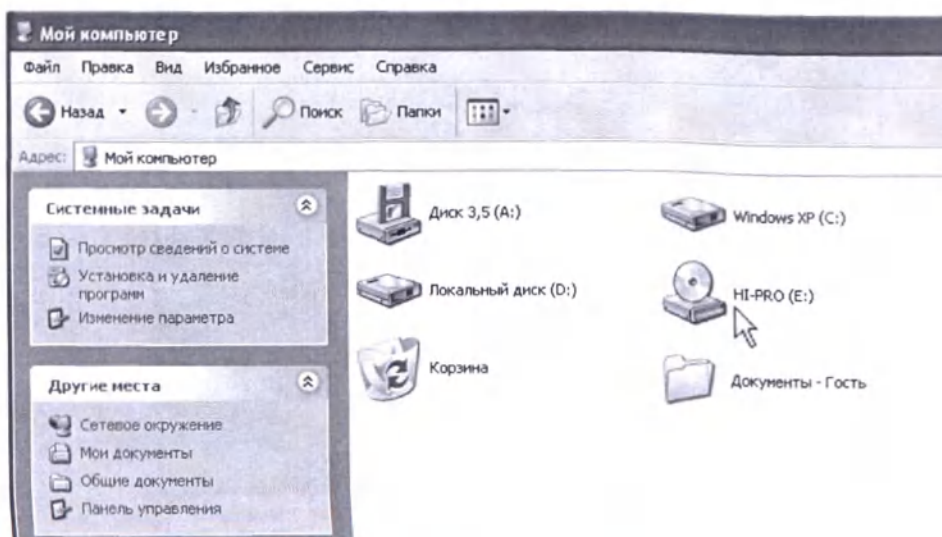


4.3 В запустившемся окне инсталлятора кликните Next.

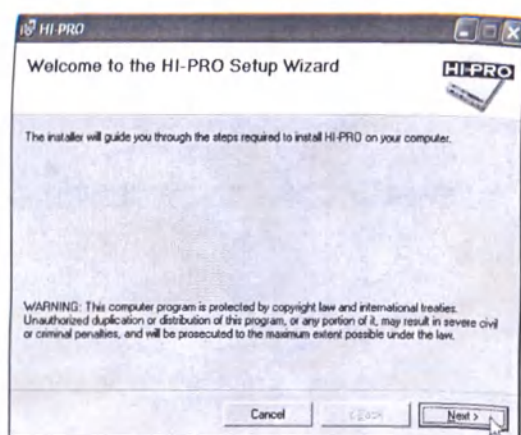


4.4 При необходимости измените каталог установки, и кликните Next.

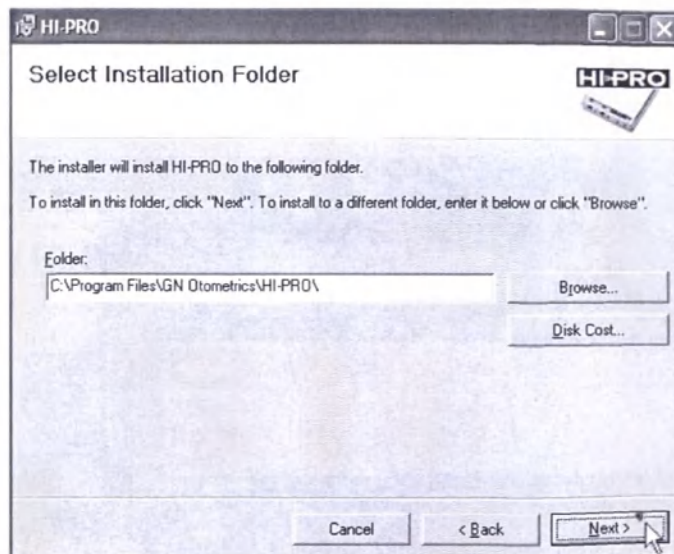


4.5 Все готово для установки Hi-Pro, нажмите Next для продолжения.

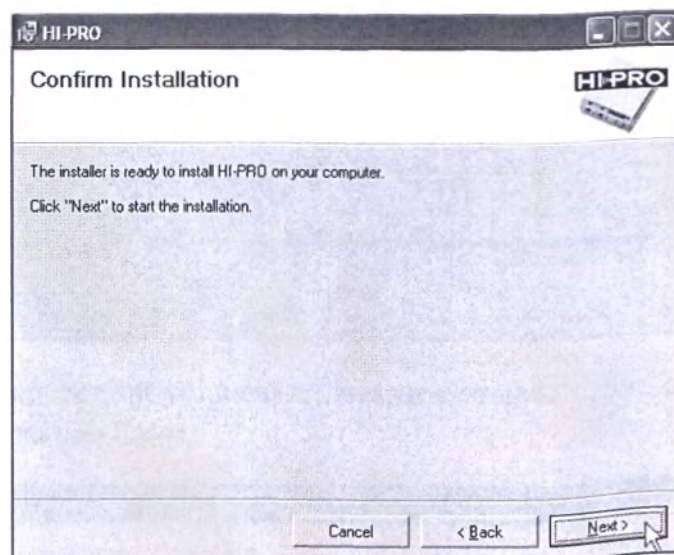


4.6 Начнется процесс установки драйверов.

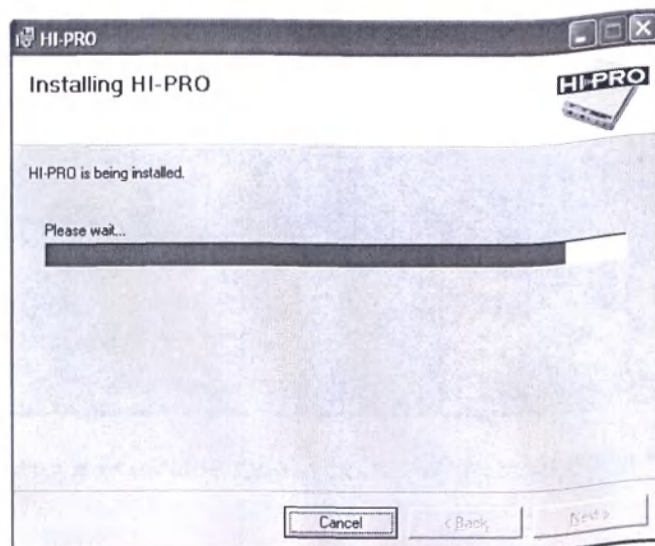

4.7 В появившемся окне выберите язык установки и тип Hi-Pro.
 HI-PRO USB – версия Hi-Pro с подключением по USB.
 “Classic” HI-PRO – версия Hi-Pro с подключением через COM порт.
 Далее нажмите OK.

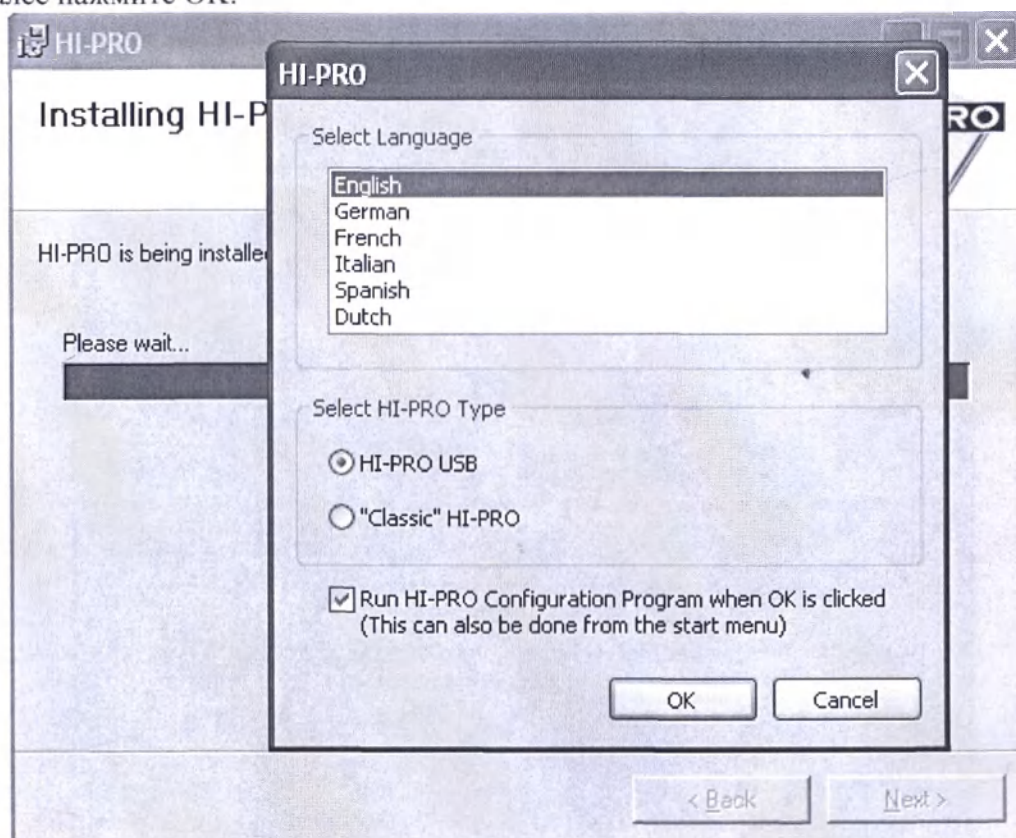


4.8 В случае корректной установки, появится окошко с сообщением об окончании установки. Нажмите на нем Close.

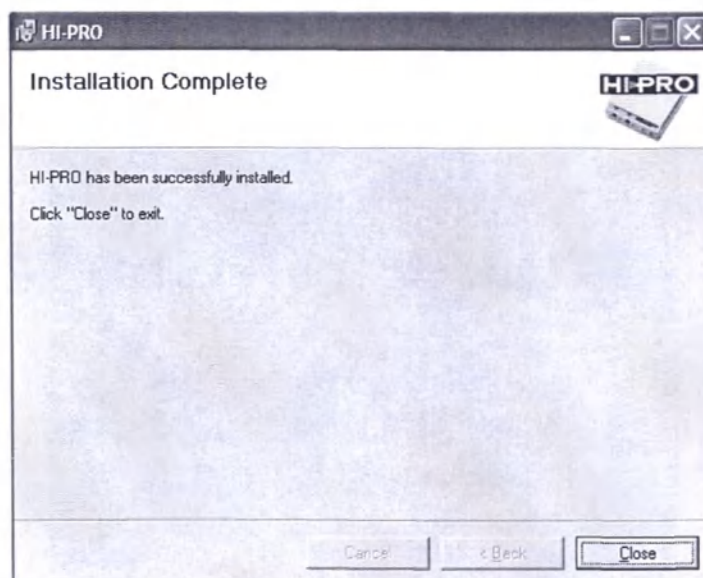

4.9 После закрытия и окончания установки запустится программа настройки Hi-Pro.


Hi-Pro должен быть подключен к компьютеру. Выберите версию Hi-Pro. В случае USB подключения поставьте галочку “USB cable to the PC”. На Hi-Pro должен гореть индикатор “Power”. Если он горит, поставьте галочку “HI-PRO is connected and the power LED is lit” (Hi-Pro подключен и на нем горит индикатор питания). Кнопка «далее» станет активной, нажмите на нее.

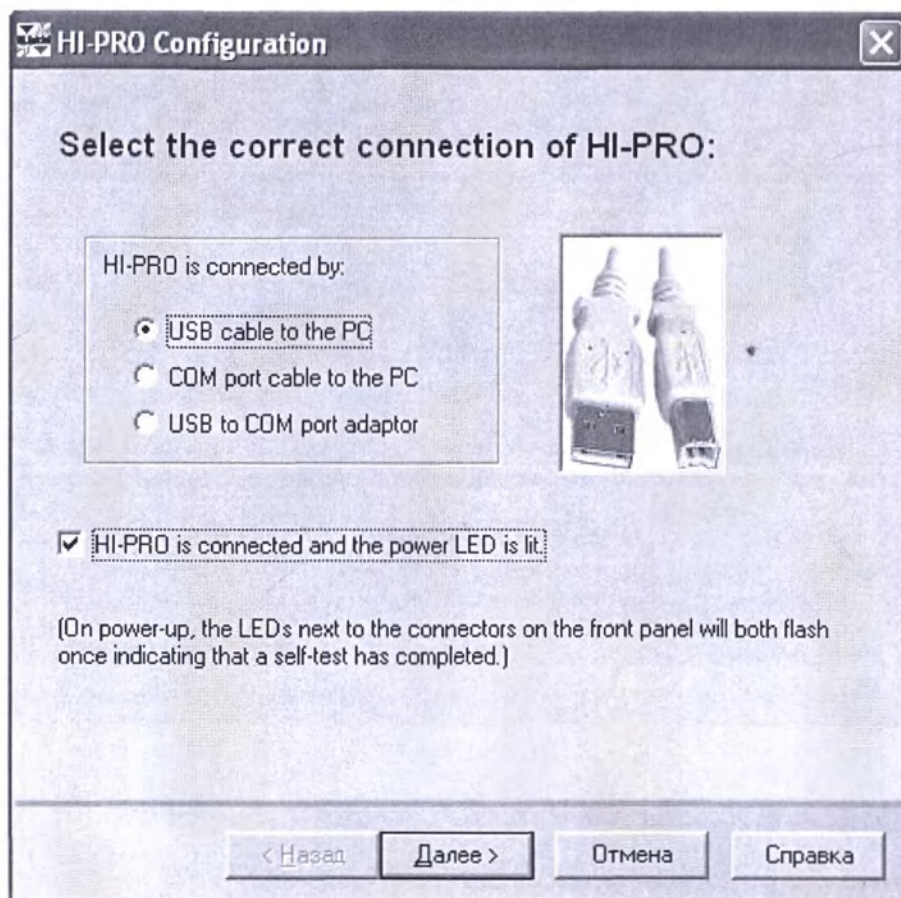


4.10 Программа начнет поиск подключенного программатора.



4.11 Если все прошло нормально, появится окно с сообщением “HI-PRO was found!” (Hi-Pro найден!).

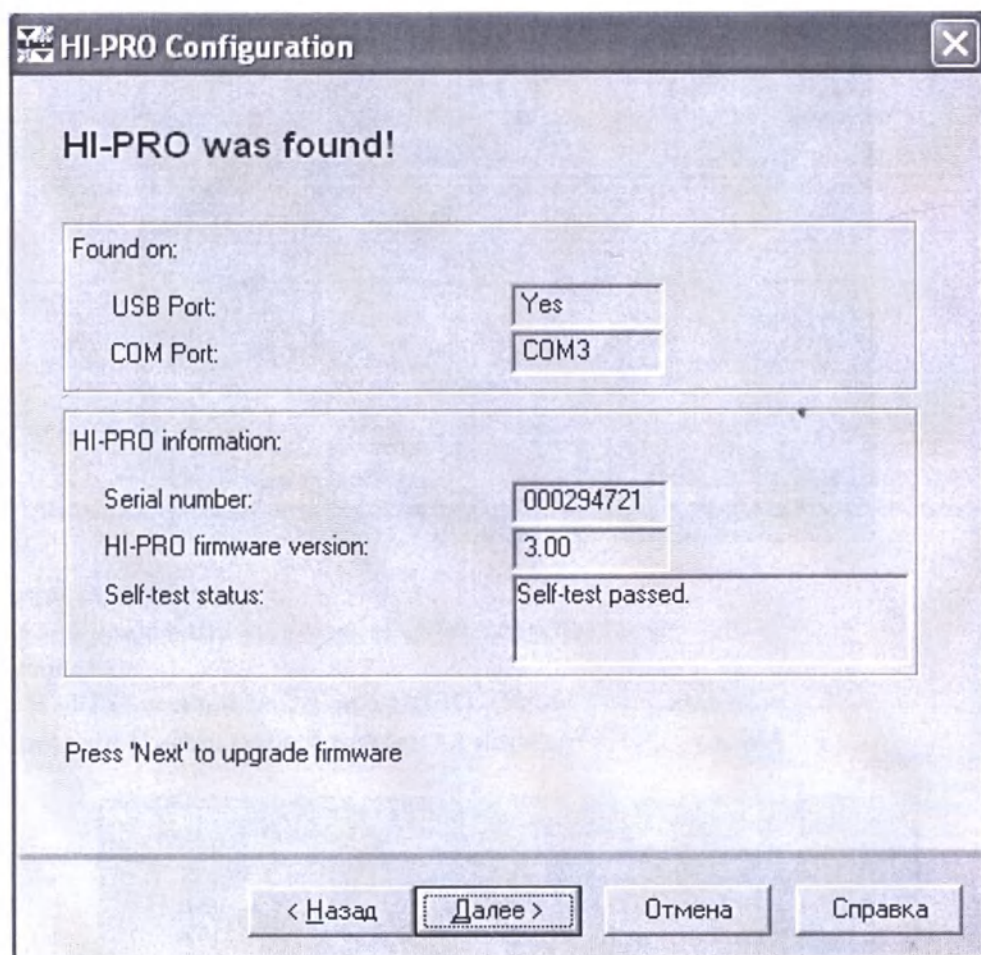


4.12 Обратите внимание на номер COM Port.

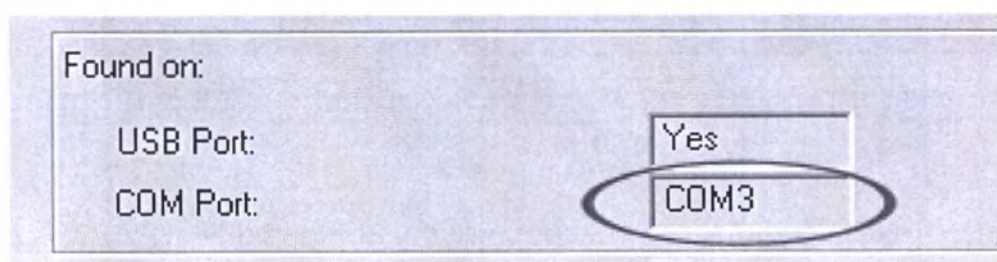

Он должен быть в диапазоне от COM1 до COM4, иначе Hi-Pro не будет работать!

4.13 Нажмите далее, а затем Finish.

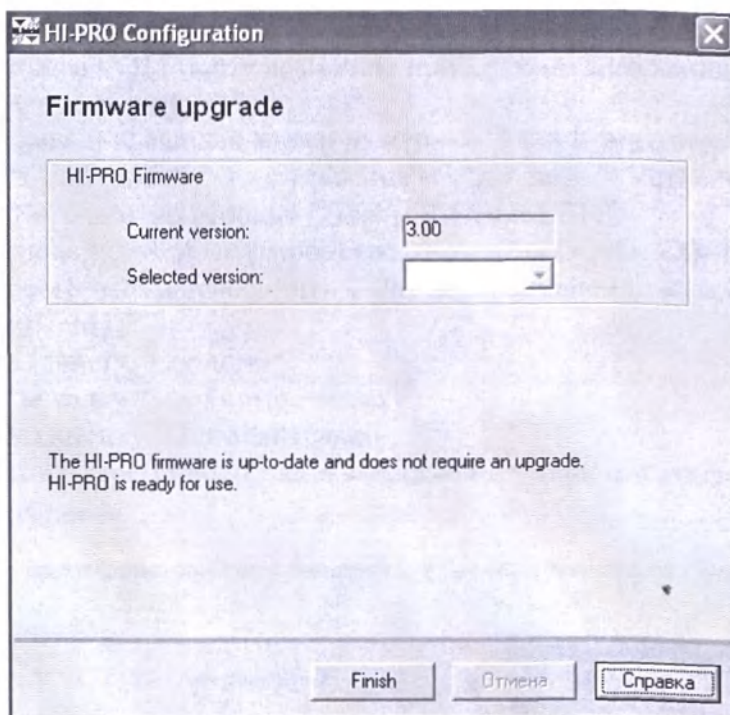


Установка завершена.

Если во время теста вы увидите окно с сообщением:

“Warning!

This HI-PRO was not found on a COM1-COM4 Port connection....”

(Внимание! Hi-Pro, не был найден на портах COM1 – COM4...)

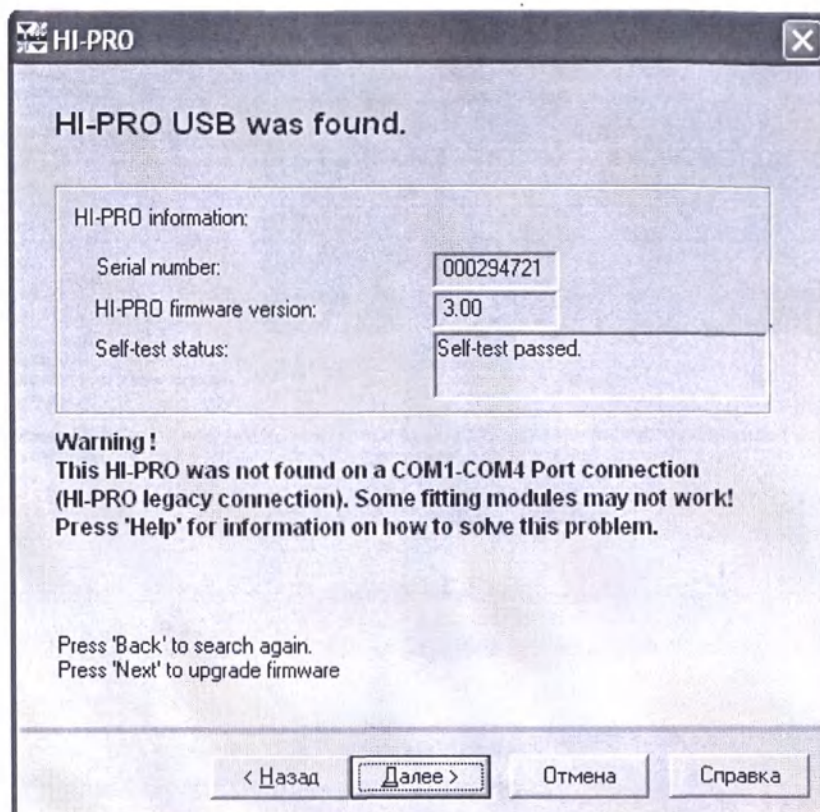


То это означает, что Hi-Pro подключился на неправильный номер порта. Чтобы это исправить, нужно сменить номер COM-порта на один из допустимых (COM1 – COM4).

Как изменить настройки COM-порта:

Изменение номера COM-порта возможно посредством изменения диапазона ввода/вывода в диспетчере устройств:


- 1 - Нажмите правой клавишей мыши на иконку “Мой Компьютер”
- 2 - Нажмите “Свойства”-> “Оборудование”-> “Диспетчер Устройств”
- 3 - Нажмите “+” рядом со строкой “Порты (COM и LPT)”
- 4 - Выберите неиспользуемое устройство с номером COM1, COM2, COM3 или COM4 для того чтобы освободить COM-порт; в нашем примере это “Bluetooth Serial Port (COM3)”.
- 5 - Нажмите клавишу “Свойства”
- 6 - Выберите вкладку “Параметры порта”
- 7 - Нажмите на кнопку “Дополнительно...”
- 8 - При помощи полосы прокрутки в выпадающем меню выберите любой свободный номер COM порта.

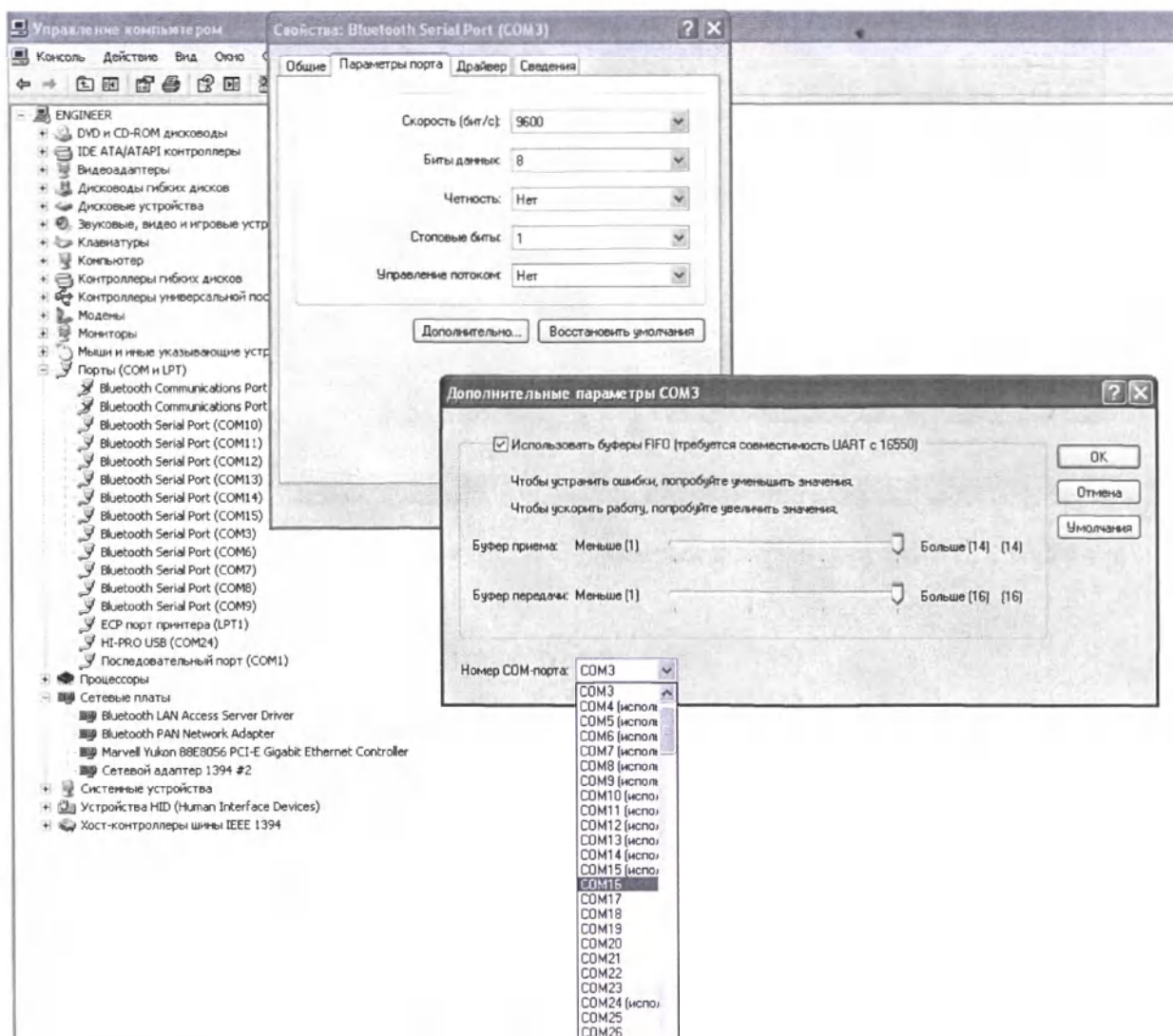


- 11 - Убедитесь, что нажали “Ок” во всех окнах
- 12 - Проверьте номер виртуального COM-порта

Тем самым вы освободили порт из диапазона 1 – 4.

Теперь проделайте шаги 1-3, в п. 4 выберите устройство “HI-PRO USB (COM xx)”

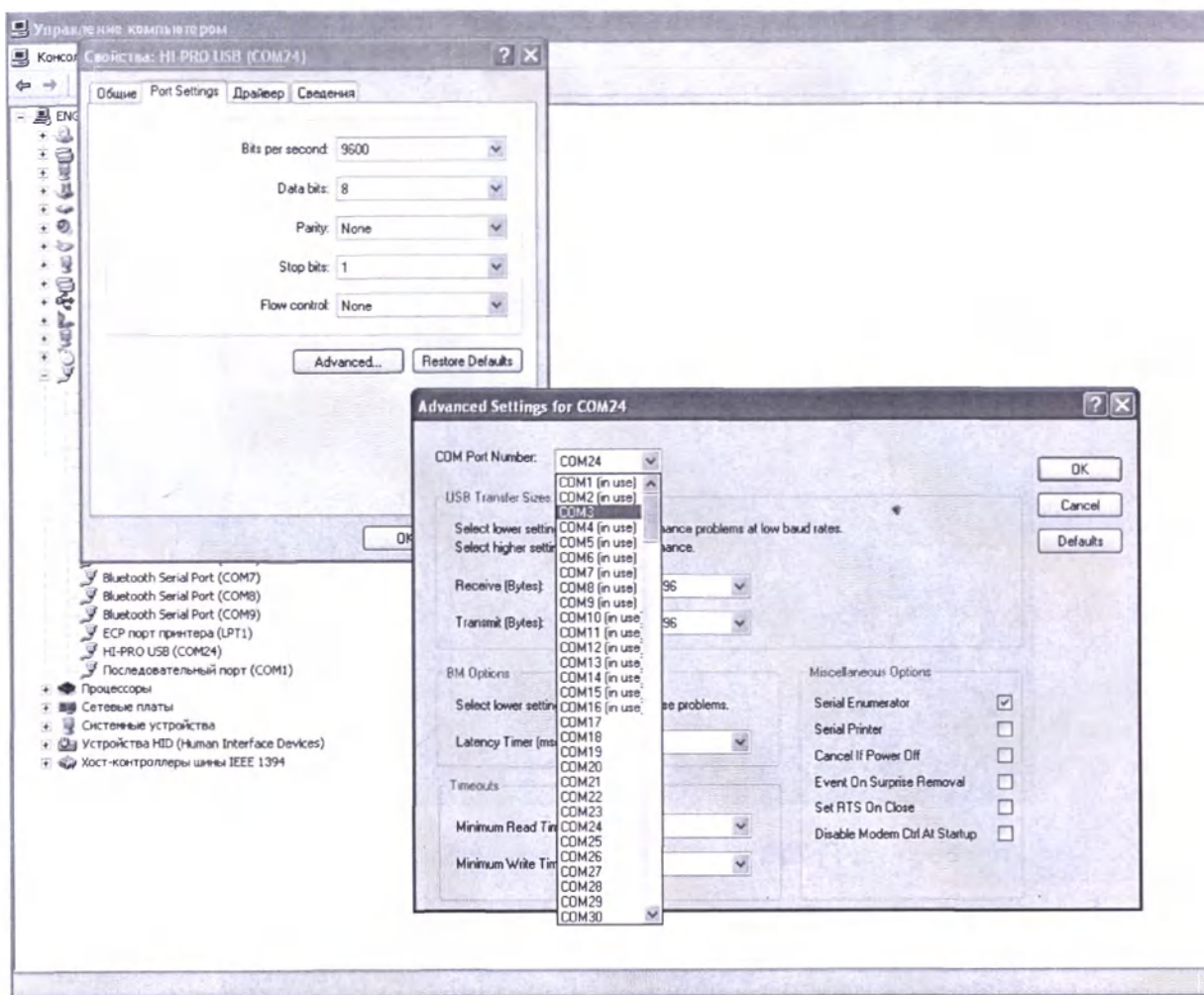


Далее п. 5-7, а в п. 8 установите освобожденный номер порта COM1 ... COM4 (в нашем примере COM3).

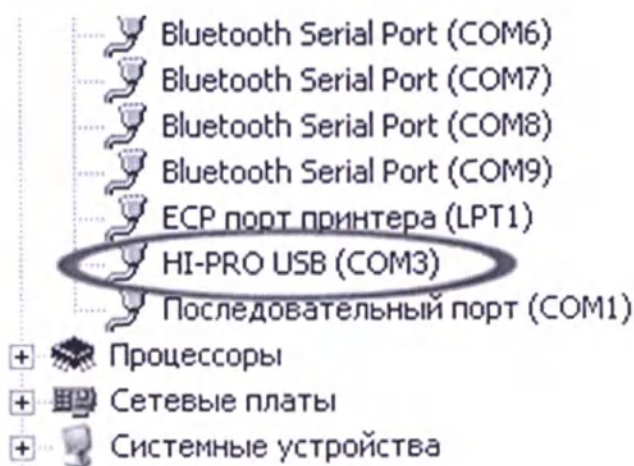


После этого запустите HI-PRO Configuration. Найти его можно “Пуск”-> “Все программы”-> “GN Otometrics”-> “HI-PRO Configuration”.

Произойдет поиск Hi-Pro.

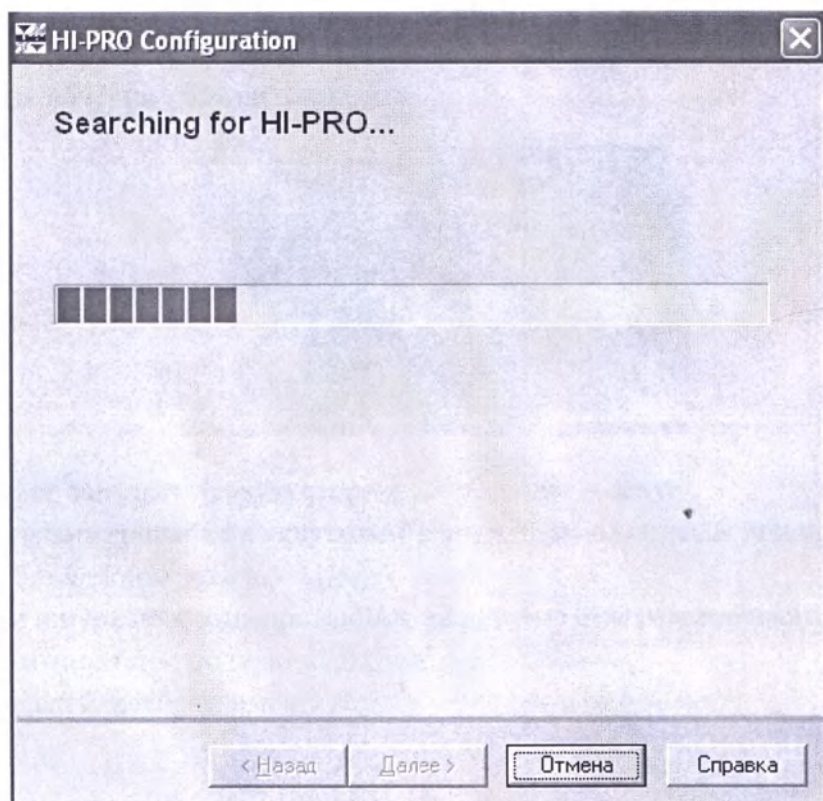

Проверьте статус прохождения теста “Self-test passed” (Тест пройден).

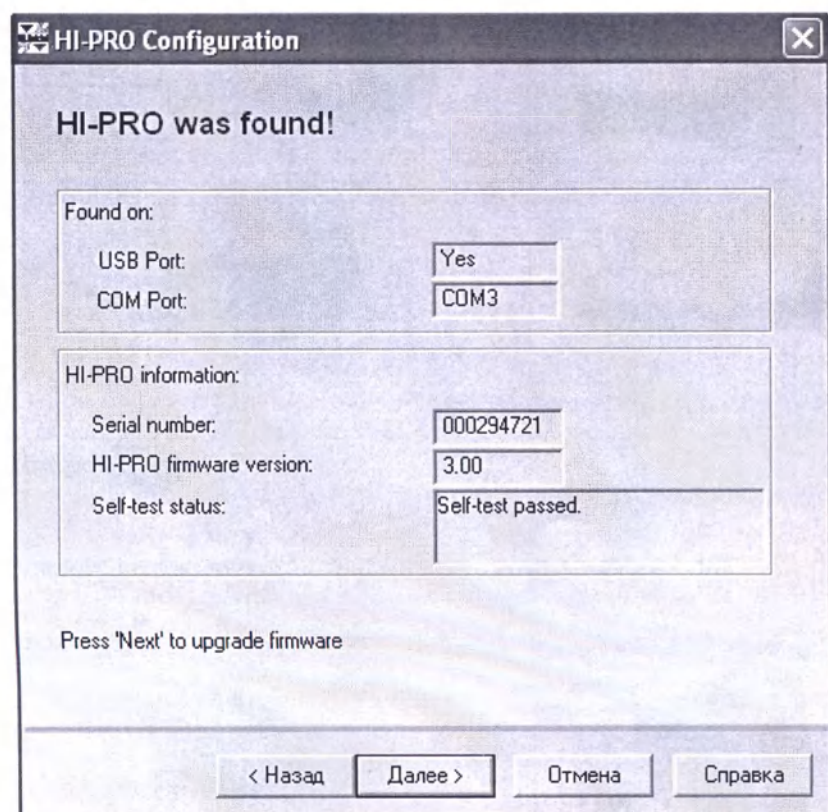

Нажмите далее, и затем finish.

Hi-Pro успешно установлен и настроен.

5. Подключение СА.

Шнуры программирования со стороны широкого разъема должны быть подключены к программатору Hi-Pro. Стрелкой на Hi-Pro и на штекерах шнуров – обозначен ключ, который при подключении должен совпадать.




Красный цвет означает правую сторону, синий цвет – левую.

Разъем программирования на слуховом аппарате располагается под крышкой разъема, либо в батарейном отсеке.

На штекере шнура программирования и на разъеме программирования имеется цветовая метка, которая при подключении должна совпадать:

- 1) для моделей, которые имеют разъем в батарейном отсеке:

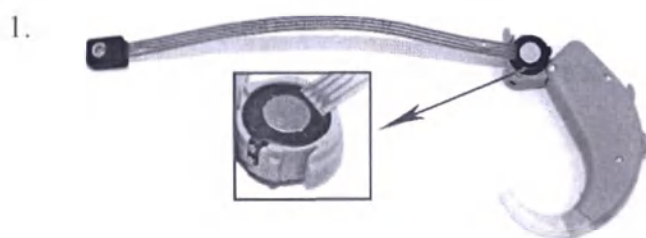

- 2) для моделей, которые имеют разъем на батарейном отсеке:



3) для моделей, которые имеют разъем под толкателем кнопки:




6. Подбор СА.

Цель этого процесса – выбор конкретной модели аппарата, которая при ее настройке обеспечила бы максимальную разборчивость речи в сочетании с комфортностью ее восприятия, что позволило бы наилучшим образом скомпенсировать имеющуюся патологию слуха.

В качестве предварительных стадий этой работы проводится сбор анамнестических данных – общение с пациентом, в процессе которого выясняются его проблемы со слухом, в каких ситуациях предполагается эксплуатация аппарата, его образ жизни, опыт использования СА и т.п. После чего проводится необходимая диагностика слуха.

Далее определяются требуемые технические характеристики СА:

- По результатам тональной пороговой аудиометрии определяется требуемое усиление СА так, что бы во всех частотных полосах можно было достичь субъективного уровня равной громкости, что обеспечит комфортное восприятие речи. Для помощи выбора СА в окне подбора в врачебной программе (в технических спецификациях) присутствует рекомендуемый диапазон настройки к подбираемому СА.

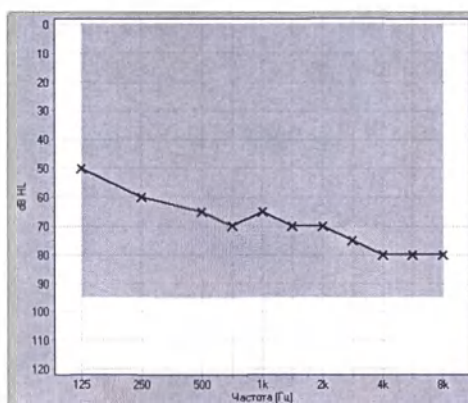

- Устанавливается требуемый максимальный уровень выходного звукового давления СА, так, чтобы обеспечить требуемый динамический диапазон и не превысить порог дискомфорта пациента.

- Устанавливаются динамические характеристики СА, так чтобы сохранить требуемую разборчивость речи и устранить возможные ее искажения.

Определение требуемого усиления СА производят с использованием экспериментально выведенных формул предписания усиления, которые учитывают получение максимально возможной разборчивости речи и максимальной комфортности ее восприятия. При этом установлено, что для сенсоневральных и смешанных потерь слуха величина требуемого усиления в каждой из частотных полос составляет в среднем 50 – 70 % от величины потери слуха. Кроме того, учитывается маскирующее действие низкочастотных составляющих речи, поэтому усиление на низких частотах, как правило, уменьшается. Как правило, во всех формулах имеются корректирующие коэффициенты, изменяющие усиление на высоких частотах для лучшей разборчивости речи. Кроме того, добавляется резервное усиление, учитывающее динамический диапазон речи.

Формулы (цели), по которым будет производиться настройка СА можно выбрать из доступных в меню настроек во врачебной программе (см. пример в п.7).

Для помощи выбора правильной – ниже описаны существующие формулы и принцип их работы:

Для линейной настройки цифровых программируемых СА могут использоваться формулы POGO, NAL, DSL (или использоваться для подбора триммерные СА).

Здесь усиление предписывается на основании пороговой аудиометрии. Все эти формулы содержат варианты половины усиления. Так POGO учитывает добавление усиления для потерь выше 65 дБ. При этом, для каждого 1 дБ больших, чем 65 дБ потерь слуха добавляется соответственно 1 дБ усиления аппарата.

Целью формулы NAL является достижение максимальной разборчивости речи на уровне слушания предпочитаемом пользователем СА. То есть если одна из частотных областей воспринимается слишком громко, то общий уровень усиления может быть понижен, не смотря на некоторое снижение разборчивости речи. Формула сочетает правило полуусиления с характером наклона аудиограммы, ослабляя низкие частоты и подчеркивая средние частоты. Для каждой частоты усиление определяется, как

$X + 0,31HL + K$, где $X = 0,05(HL500 + HL1000 + HL2000)$, а K изменяется от -17 до +1 дБ., в зависимости от частоты.

DSL не пытается сделать речь равно громкой в каждой частотной области, хотя стремится обеспечить комфортный уровень громкости. В основе этой формулы лежит снижение приращения величины усиления СА с увеличением величины потери слуха. По существу это специальная таблица величины усиления аппарата, в зависимости от частоты и порога слуха, учитывающая снижение усиления на низких частотах. Такое замедление роста усиления при увеличении потери слуха учитывает пороги дискомфорта пациента. Этой формулой подбора усиления часто пользуются при слухопротезировании детей (педиатрическая формула настройки).

В общем случае NAL рекомендует меньшие значения усиления в области высоких частот, чем POGO и DSL. Это вызвано тем, что при больших наклонах аудиограмм в

области высоких частот полезность высокочастотной информации сильно уменьшается. Проще говоря, если улитка повреждена, то она не сможет передать дальше в сохраненные участки слуховой системы больше информации, чем она может принять. Поэтому наиболее информативной остаются низкочастотная и среднечастотная области. Как вариации этой формулы существуют NAL-R, NAL-RP, учитывающие поправки усиления для тяжелых потерь слуха.

Для нелинейных СА функция усиления в зависимости от частоты устанавливается для нескольких входных уровней. При этом определяется не только частотная, но и амплитудная характеристика СА. Как примеры таких процедур можно привести формулы подбора FIG 6, DSL (I/O), NAL-NL1.

FIG 6 определяет, сколько требуется усиления, для нормализации громкости для входных сигналов среднего и высокого уровня. Она использует данные громкости, усредненные по большому числу людей с похожими степенями пороговых потерь. Здесь усиление прямо предписано для входных уровней 40, 65 и 95 дБ и для других уровней вводится путем интерполяции.

Для входного сигнала низкого уровня до 40 дБ усиление (G) равно: 0 при HL менее 20 дБ, $G=HL-20$ при потерях от 20 до 60 дБ, $G=0,5 HL+10$ для потерь более 60 дБ.

Для комфортного уровня входных сигналов - 65 дБ меняется формула для потерь выше 60 дБ: $G=0,8 HL-23$.

Наконец, для входных сигналов высокого уровня $G=0$ при HL до 40 дБ и $G=0,1(HL-40)$ для потерь более 40 дБ.

Следует отметить, что в основном эти формулы применяются для потерь слуха до 80 дБ.

DSL (I/O) имеет два варианта. Первый вариант называется линейным, что означает линейный характер амплитудной характеристики аппарата в широком диапазоне входных сигналов. Это не означает линейности усиления, а поясняет то обстоятельство, что коэффициент компрессии является постоянным в широком динамическом диапазоне (например, компрессия типа WDRC). В линейном варианте DSL (I/O) используется достаточно большой коэффициент компрессии, чтобы подогнать расширенный динамический диапазон на каждой частоте в динамический диапазон нарушенного слуха человека. Этот расширенный диапазон определяется от нормального порога слуха до порога дискомфорта пораженного слуха. Эта процедура не нацелена на нормализацию громкости, так как имеет больший коэффициент компрессии, но позволяет обеспечить комфортность восприятия вплоть до уровня дискомфорта пациента.

Второй вариант DSL (I/O) – так называемый, криволинейный, направлен как раз на нормализацию функции громкости и использует нелинейную амплитудную характеристику СА. При применении этой процедуры порог нормального слуха усиливается до порога пораженного слуха, а уровень дискомфорта нормального слуха усиливается до уровня дискомфорта пораженного слуха. При этом, форма кривой «вход – выход» зависит от скорости нарастания громкости для человека с нормальным слухом,

относительно человека с пораженным слухом. Эта процедура разработана не так полно, как линейный вариант, так как есть трудности в установлении шкалы категорий громкости.

Формула NAL-NL1, в отличие от предыдущих методов, не преследует цели восстановления нормальной громкости, а предназначена для максимизации разборчивости речи при общем уровне громкости речи не превышающем уровня нормально слышащего человека. Метод NAL-NL1, которое учитывает внесенное аппаратом усиление в третьоктавных полосах, которое связано с порогом на каждой полосе, трехчастотным средним порогом, наклоном аудиограммы от 500 до 1000 Гц и с общим уровнем широкополосного сигнала со спектром, близким к спектру речи. Это уравнение было обработано компьютерным путем, для множества аудиограмм, и были найдены оптимальные усиления для каждой из них и для каждого входного уровня. При этом учитываются и варианты смешанных потерь слуха, то есть костно-воздушный зазор.

Если сравнивать нелинейные процедуры установки усиления, то NAL-NL1 предписывает меньшее усиление для низкочастотных сигналов, особенно на низких входных уровнях.

Выбор той или иной формулы подбора зависит от предпочтений слухопротезиста, но важна последующая оценка этого выбора человеком, которому подбирается СА.

Как правило, наибольшее акустическое усиление выбранного аппарата должно иметь на 10 – 15 дБ большую величину, чем предписанное формулой подбора. Это нужно для создания резерва, чтобы можно было регулировать громкость в различных ситуациях и позволит обеспечить работу СА в зоне наименьших искажений при средних положениях регулятора громкости.

Максимальный выходной уровень звукового давления аппарата не должен превышать порог дискомфорта более чем на 10 дБ.

Применение линейного или нелинейного аппарата зависит от величины диапазона остаточного слуха пациента. Этот диапазон приближенно можно определить как разность порога дискомфорта и порога слуха для частот 500, 1000 и 20000 Гц.

Если эта разница более 50 дБ (90 дБ громкой речи и 40 дБ шепотной речи), то применяется аппарат с линейным усилением.

Если эта разница находится в пределах от 30 до 50 дБ (предел 30 дБ определяется динамикой речи), то предпочтительнее выбирать СА с компрессией.

Если эта разница меньше 30 дБ или порог дискомфорта окажется на уровне 90 – 120 дБ, то необходимо выбирать только аппарат с нелинейным усилением, то есть имеющий компрессию.

7. Настройка программируемых СА во врачебной программе


Во врачебной программе есть подробная инструкция по работе в программе и настройке СА. В меню “Помощь” или выводом горячей клавишей “F1”.

Ниже рассмотрим пример программирования в ПО “Аурика”:

- Запустите программу.
- Подключите СА к компьютеру через программатор HiPro (см. п.п.4).
- Если программа настройки запущена из NOAH, то для работы с базой пациентов и сеансов используйте элементы управления NOAH. Если же программа используется без NOAH, то следуйте указаниям ниже:

Примечание. Рекомендации по приобретению, установке и работе в NOAH Вы можете найти на сайте <http://himsa.com/>


- Нажмите  в окне Выбор Пациентов и Сеансов.

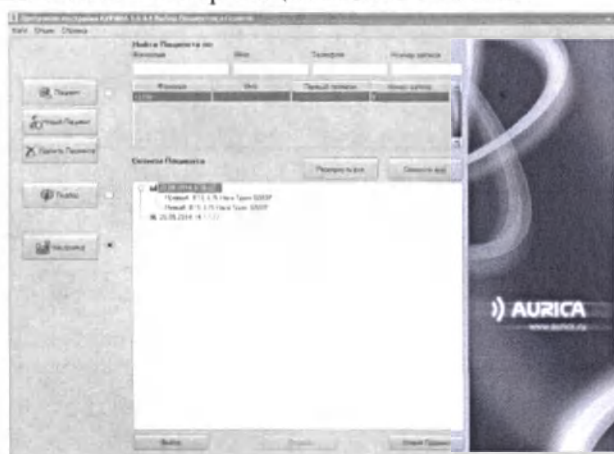


- Заполните поля в окне Информация о Пациенте и Аудиограмма.

Примечания:

- Поле **Фамилия** обязательно должно быть заполнено. Все остальные поля необязательны.
- Рекомендуется указывать наличие опыта пользования СА, дату рождения Пациента, а также, будет ли выполняться бинауральный подбор. Некоторые формулы подбора используют эту информацию для более точной настройки.

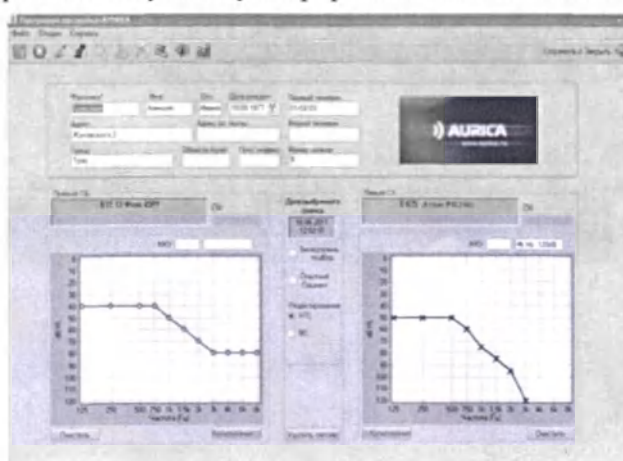

- С помощью «мыши» введите Правую и/или Левую аудиограммы слуховых потерь Пациента.

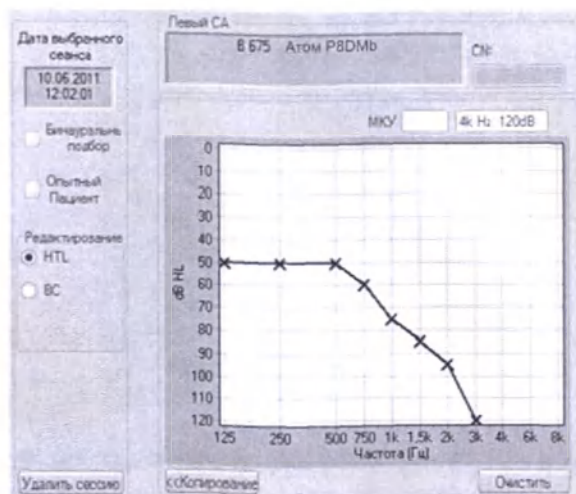


Нажатием левой кнопки мышки - добавляется точка




Правой - удаляется

- Перейдите в Окно настройки, нажав на кнопку .

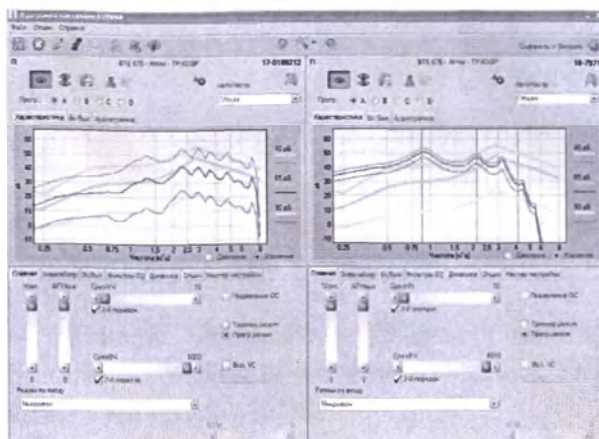

- Произведите авто настройку, нажав кнопку  **АвтоНастр.** После окончания настройки следует сохранить изменения в память слухового аппарата, нажав кнопку .
- По индивидуальным предпочтениям пациента, следует прибегнуть к ручной подстройке СА, воспользовавшись дополнительными функциями программы в окне настройки.


Кликавая на закладках с различными органами управления

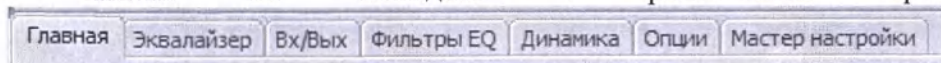

можно получить

доступ к управлению параметрами СА.

Закладка «Главная»

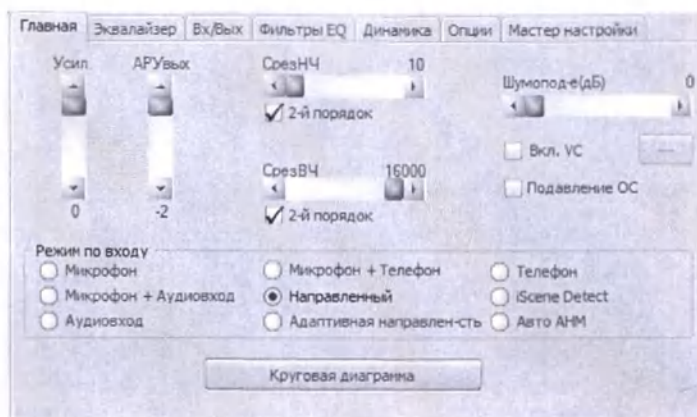


В этой закладке задаются основные параметры работы СА:

Выбирается режим по входу (на каждую из программ можно запрограммировать свой режим по входу и произвести индивидуальные настройки).

Режимы по входу:


- **Микрофон** – активен только основной (передний микрофон). Этот режим рекомендуется активировать на первой программе с общей настройкой;
- **Микрофон + Аудиовход** – активен основной микрофон + есть возможность подключить внешние источники звука через разъем программирования;
- **Аудиовход** – активен только аудиовход;
- **Микрофон + Телефон** – активен основной микрофон + встроенная индукционная катушка, которая позволяет прослушивать звуки по средствам магнитной индукции, с динамика телефона или прослушивать звуки в помещении, оборудованном индукционной системой;
- **Направленный** – активен основной и второй (задний) микрофон, задается фиксированная направленность, становится активной кнопка “Круговая диаграмма” с регулировкой усиления заднего микрофона;

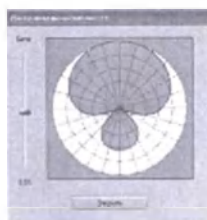

Этот режим удобен при настройке СА под определенную акустическую обстановку (которая не меняется), н.п. под прослушивание в небольшой аудитории.


- **Адаптивная направленность** – активен основной и второй микрофон, направленность при этом автоматически меняется под источник звука. Этот режим удобен под прослушивание в небольших помещениях со сменной акустической обстановкой;
- **Телефон** – активна только встроенная индукционная катушка;
- **iScene Detect** – активен основной микрофон, при этом встроенный алгоритм микросхемы меняет настройку усиления под выделение речевых звуков;
- **Авто АНМ – Автоматическая адаптивная направленность** – активен основной микрофон, автоматически определяется необходимость включения второго микрофона. Алгоритм определяет источники звука (спереди /сбоку /сзади) и автоматически меняет усиление, не затрагивая при этом звуки из переднего микрофона. Этот режим удобен для прослушивания в больших помещениях с постоянно меняющейся акустической обстановкой и различными фоновыми шумами.

Закладка «Эквалазер»

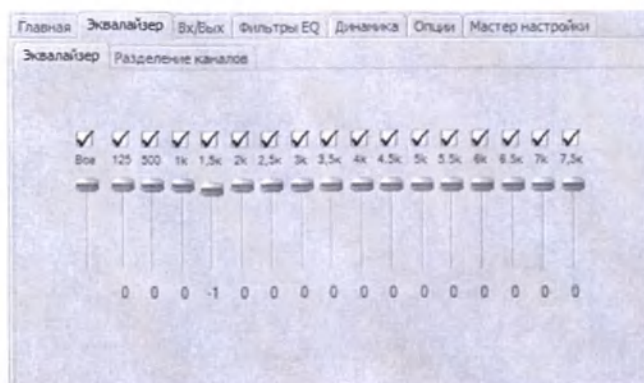


В этой закладке можно ограничить усиление на отдельном участке полосы частот.

Закладка «вход/выход» (динамические параметры).

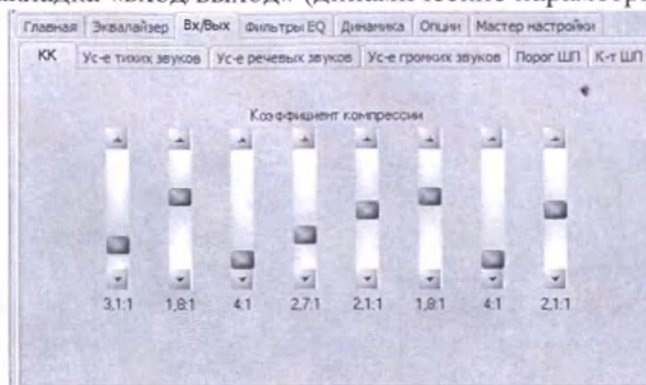


В этой вкладке можно усилить или убавить уровень звуков на любом отдельном участке полосы частот, а так же устанавливать порог и уровень шумоподавления.

Закладка «Фильтры EQ»

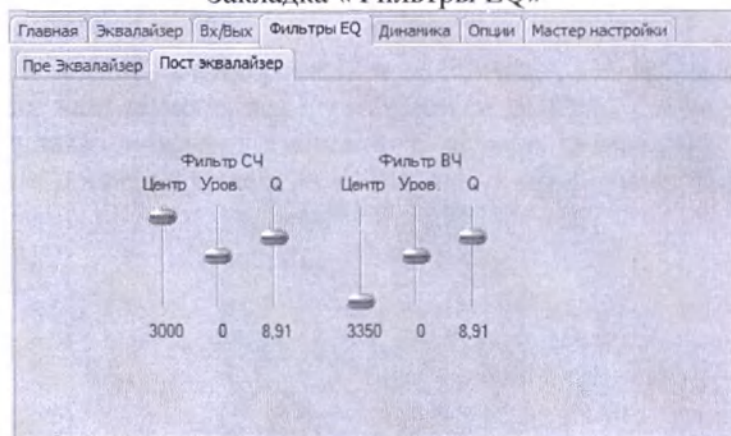


В закладке фильтров эквалайзера можно выбрать необходимый участок в полосе частот и отрегулировать усиление звуков так, как это требуется пациенту.

Закладка «Динамика»

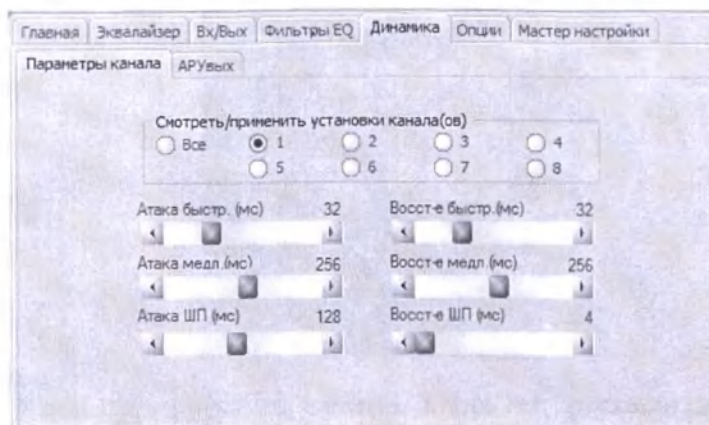


Здесь можно устанавливать временные параметры работы каналов и АРУ.
Примечание. По умолчанию установлены оптимальные временные значения.


Закладка «Опции»

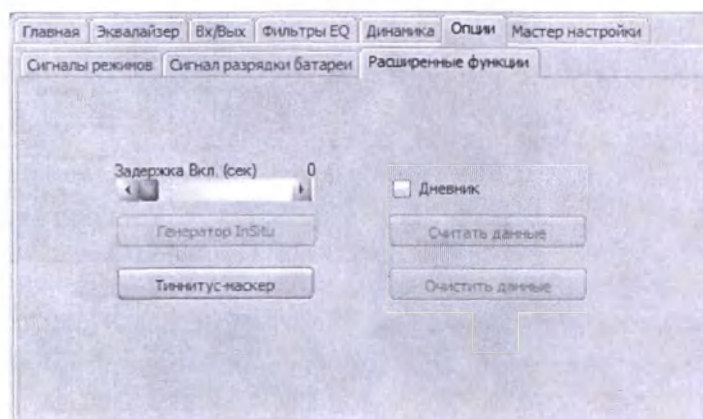


В этой закладке можно активировать и изменять уровень звуковых сигналов режимов работы таких как: включение, переключение программ и разряда батареи. В «Расширенных функциях» можно установить задержку включения СА, запустить: «Генератор InSitu» - для проверки потери слуха пациента через слуховой аппарат;

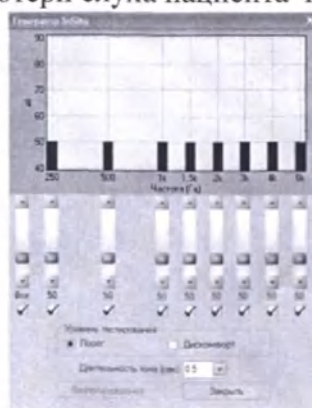


«Тиннитус-маскер» - установить необходимый уровень шума на выбранной программе СА для блокировки и лечения у пациента собственного шума в ушах;

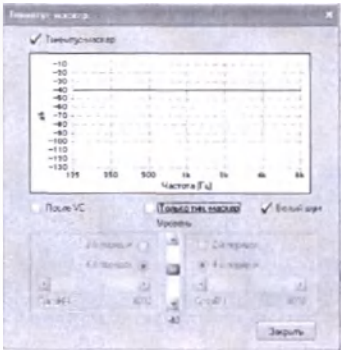


активировать дневник регистрации данных, а так же, считать данные с дневника. Дневник может помочь слухопротезисту в дальнейшем, при обращении пациента за под настройкой СА.

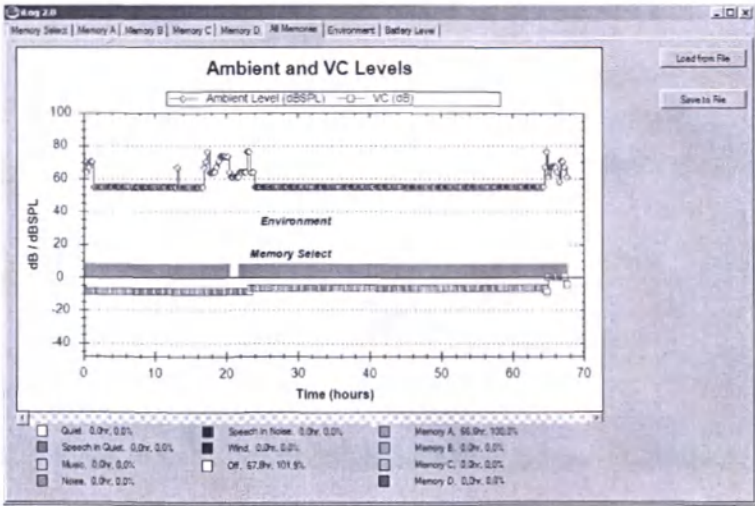


Кликакая на закладках с различными графиками можно просматривать ЧХ аппарата, графики Вход/Выход и Аудиограммы:

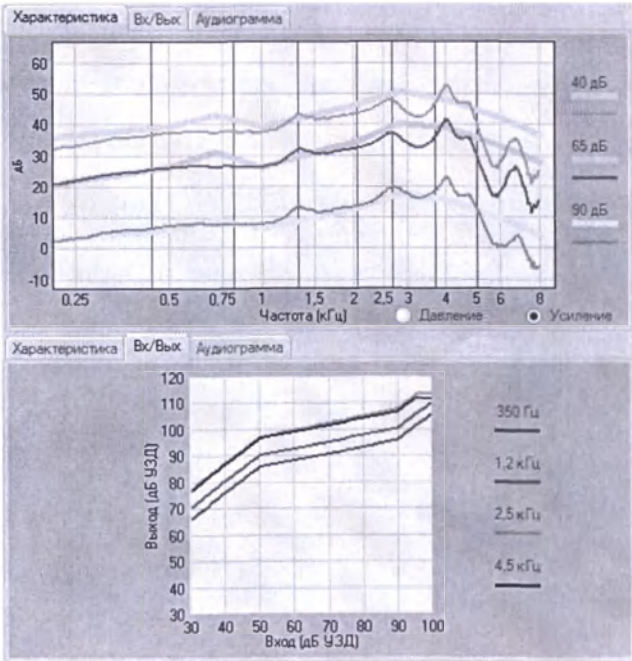

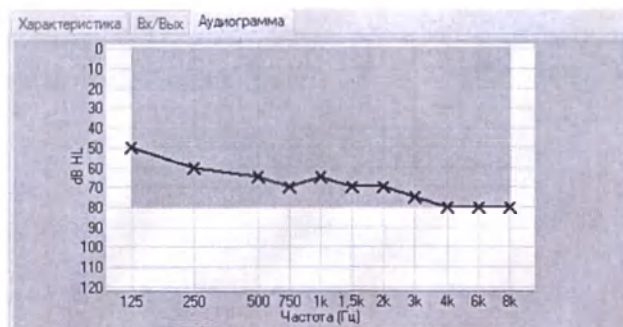

Кнопки главного меню программы:

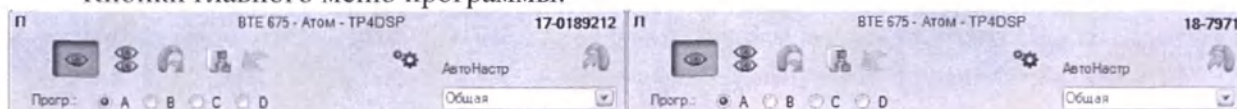

Кликавая на или можно быстро переключаться между двумя конфигурациями настроек СА, чтобы помочь Пациенту выбрать лучшую.

Кликнув на можно автоматически подстроить параметры СА в соответствии с целевыми графиками.

Кликнув на можно запустить поиск подключенных СА и считывание параметров из всех их программ.

Кликнув на можно записать (прожечь) параметры настройки СА для всех программ прослушивания сразу.

Кликавая на можно отключать/включать прохождение звукового сигнала через СА.


Если значок с зеленой галочкой – значит, звук проходит на это ухо.

Если значок с крестиком – значит, звук на это ухо не проходит.

Нажать чтобы распечатать запись пациента (если имеются данные подбора).


Нажимая - можно пошагово отменять произведенные настройки.

Кликнув на можно перейти в окно управления программами:

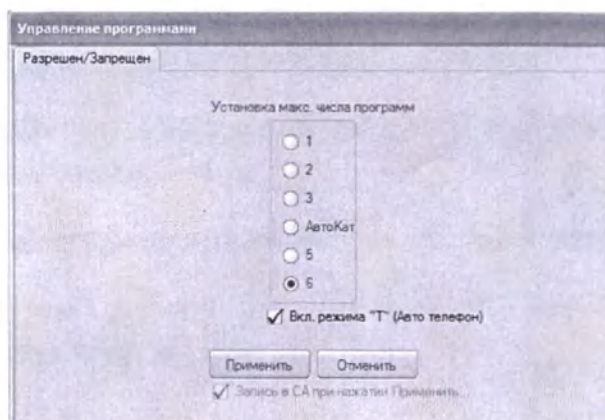

Здесь можно выбрать нужное количество программ, и включить/выключить режим телефонной катушки "Т".

Кликнув на **"АвтоНастр"** можно автоматически оптимизировать параметры настройки для типовых условий прослушивания, таких как Ресторан, Аудитория, Музыка и т.д.

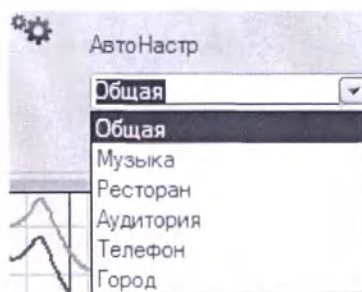

Кликнув на **Сохранить и Заккрыть** можно сохранить результаты и выйти из программы.



чтобы добавить информацию в Заметки по Пациенту



чтобы перейти в окно Выбора Пациентов и Сеансов




чтобы перейти в окно Информации о Пациенте



чтобы перейти в окно Подбора слухового аппарата

В выпадающем меню Инструментов Настройки  есть несколько полезных функций...

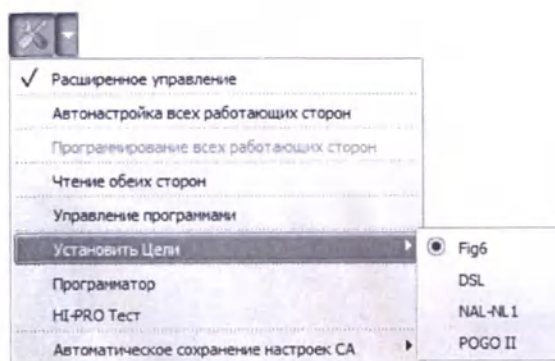

- **"Расширенное управление"** позволяет переключаться между показом полного набора регулируемых параметров и сокращенного;

- **Автонастройка**, считывание или программирование всех подключенных СА;

- **"Установить Цели"** - выбор формулы настройки, по выбранной формуле будет производиться автонастройка подключенного(ых) СА;

- **"Программатор"** - позволяет выбрать программатор по умолчанию;

- **"Hi-Pro Тест"** – тестирование подключения программатора;

- “Автоматическое сохранение настроек СА” - здесь можно выбрать, куда будут записываться настройки, производимые в программе: - в постоянную память СА (все произведенные настройки сохраняться в СА после его отключения от программатора) или во временную память (в этом случае если перед отключением СА от программатора не нажать кнопку  - все произведенные настройки в СА не сохраняться).

8. Настройка триммерно-программируемых СА.

В триммерно-программируемых моделях СА встроено до 4 триммеров (неоперативных регулятора). По умолчанию триммерно-программируемые модели СА переключены на триммерный режим и назначены триммеры:

Таблица 3

Триммер		Описание
1	H	Частота среза в области низких частот (НЧ)
2	L	Частота среза в области высоких частот (ВЧ)
3	Ао	Автоматическая регулировка усиления (АРУ) по выходу
4	G	Усиление

Триммеры располагаются под триммерной крышкой СА. Предназначены для под настройки СА слухопротезистом во время примерки по потери слуха пациента. По умолчанию, триммеры установлены в максимальном положении (выключенном), т.е. СА имеет максимальную частотную характеристику (ЧХ).



При вращении триммера в сторону против часовой стрелки:


H - происходит завал ЧХ в области НЧ. Такая настройка подходит для людей с потерей слуха в области ВЧ, а так же для подавления низкочастотных шумов, вызывающих дискомфорт;

L – происходит завал ЧХ в области ВЧ. Такая настройка подходит для людей с потерей слуха в области НЧ, а так же для выравнивания усиления при открытом протезировании;


Ао – увеличивается уровень, на который будет подавляться усиление при поступлении на микрофон резких, громких звуков. Активация и установка АРУ необходима для людей, чувствительным к резким, громким звукам. При возникновении резких звуков – в СА автоматически меняется уровень усиления без потерь и искажений.

Г – ограничение максимального усиления СА при максимальном положении регулятора громкости. Необходимо ограничение, когда максимальное усиление причиняет дискомфорт пациенту.

СА можно переключить во врачебной программе как в программируемый режим (в этом случае можно производить настройку СА через врачебную программу, по примеру, описанном в п. 6) или переключить СА в триммерный режим.

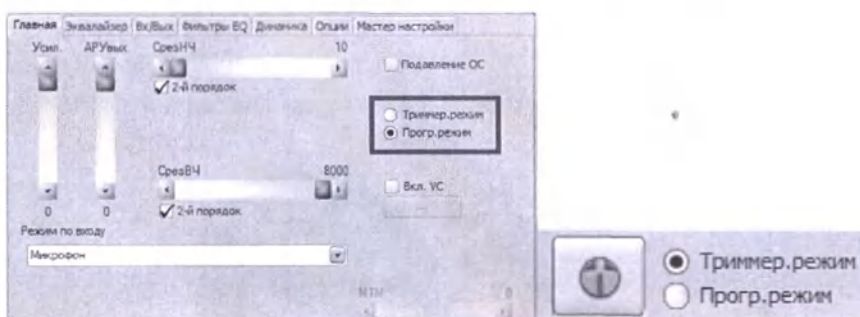

Через врачебную программу можно назначить желаемую регулировку триммерами:

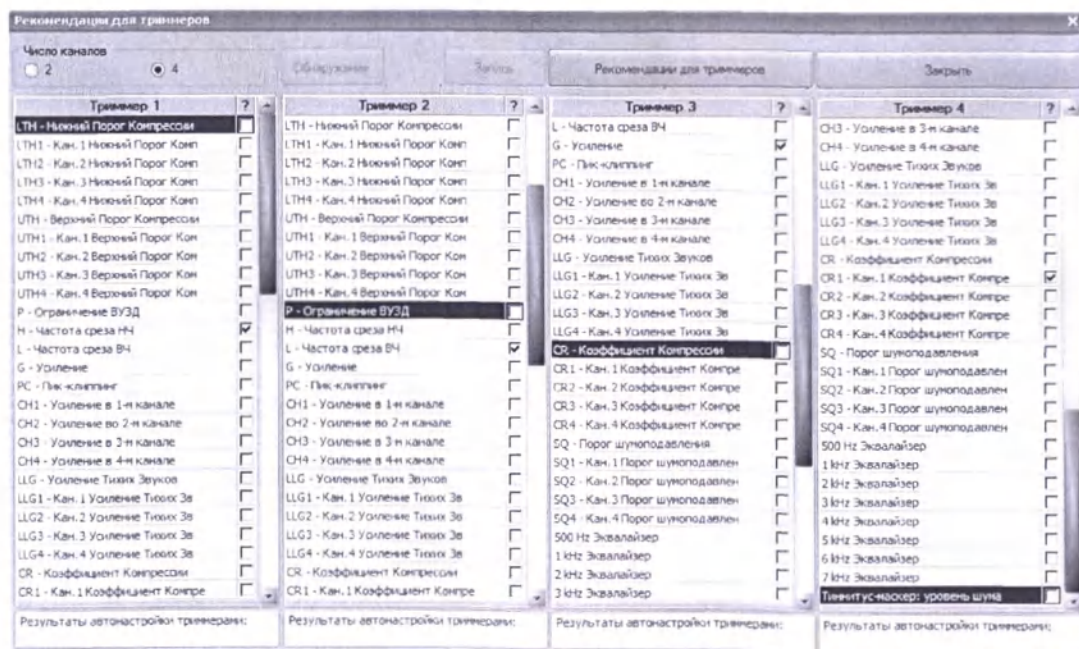

9. Дополнительные функции

9.1 Аудиовход

По желанию пациента, для прослушивания звуков через слуховой аппарат от различных источников звука, имеющих выход для подключения наушников «3,5 jack» (н.п. FM-систему Диалог, аудио плеер, телефон и т.д.), слуховой аппарат может быть оснащен аудио шнуром.

9.1.1 Активация аудио входа в слуховом аппарате.

Для возможности работы аудио входа, необходимо подключить слуховой аппарат к врачебной программе (см. пп.5,7) и активировать на любой из программ (по желанию пациента) режим «Аудиовход», либо «Микрофон + Аудиовход».

9.1.1 Подключение Аудио шнура:

- 1) Один конец аудио-шнура подключить к разъему аппарата:



В моделях с каблучком – аудио шнур подключается через каблучок:

1.



2.

Метки должны совпадать




- 2) Второй конец Аудио-шнура подключить к устройству, например, к телефону:



9.2 Трубочка OpenFit

При потерях слуха, преимущественно в области высоких частот, по желанию пациента, сурдолог может заменить рожок на тонкую трубочку OpenFit. Размер трубочки подбирается индивидуально, таким образом, чтобы при расположенном на ухе слуховом аппарате – выход трубочки был расположен в центре канала уха пациента. Так же, следует обратить внимание, что трубочки с синим обозначением размера, предназначены для левого уха, а трубочки с красным обозначением – для правого. Информация по замене рожка на трубочку OpenFit предоставлена на рисунке:

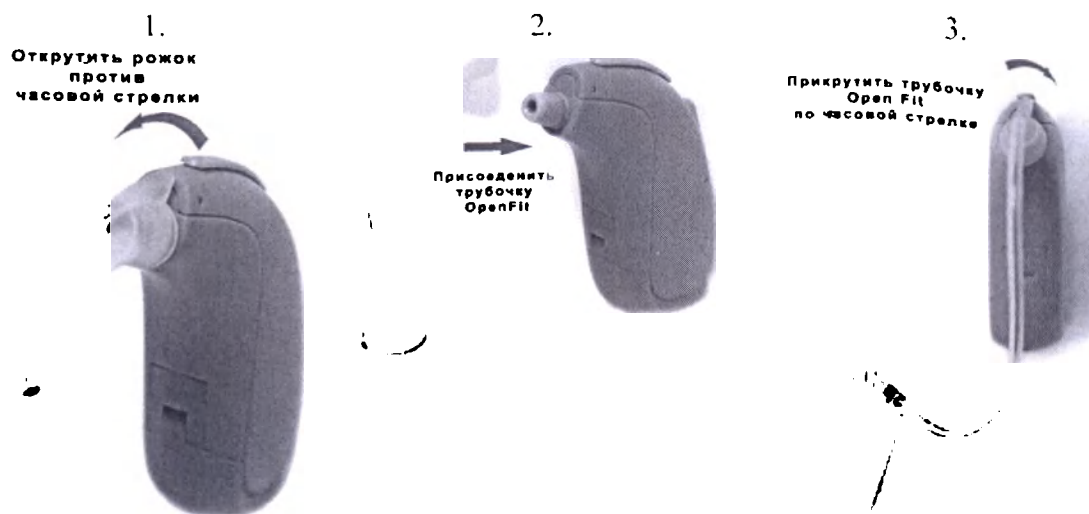

10. Техническая поддержка.

Техническую поддержку программного обеспечения «Аурика» обеспечивает изготовитель программного обеспечения:

ООО «Аурика»

Россия, 301138, Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Иншинский, тер. Технопарк

Иншинский, зд. 1, ком. 304-306

Тел. +7 (4872) 71-82-82

Прошито, пронумеровано

31 (тридцать один) листов

скреплено подписью и печатью

Генеральный директор ООО «Аурика»

_____ Мурзинов М.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АУРИКА»

Мурзинов М.В.



«09» апреля 2021 г.

Руководство по эксплуатации/паспорт

на медицинское изделие

Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» ("Like") по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, с принадлежностями, варианты исполнения

Паспорт. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, с принадлежностями, варианты исполнения

Поздравляем вас с удачным приобретением!

Мы очень рады, что вы выбрали нашу продукцию – независимо от того, знакомы вы с ней или приобретаете слуховой аппарат компании “Аурика” впервые. Для нас приятно знать, что все больше и больше людей в нашей стране используют слуховые аппараты Aurica, предпочитая их аналогам других марок. Но вдвойне приятно видеть, как люди, однажды купившие аппарат Aurica, в дальнейшем становятся нашими постоянными клиентами и настоящими друзьями.

Мы приложили все усилия к тому, чтобы сделать наши слуховые аппараты еще лучше – ведь мы знаем, как важно, чтобы слуховой аппарат был надежным, современным и удобным в использовании. Мы хотим, чтобы вы, покупая аппарат Aurica, получили то, в чем нуждались больше всего – возможность радоваться жизни без ограничений.

**Давайте слышать вместе!
Компания “Аурика”.**

Содержание

Наименование медицинского изделия

Общая информация. Внешний вид слухового аппарата (СА)

Советы по использованию/Правила безопасности

Показания к применению/Область применения/Влияние на водителей

Безопасность использования

Предостережения/Предупреждения

Противопоказания

Замена батареек

Способ утилизации батареек

Включение и выключение аппарата

Как правильно надеть и снять слуховой аппарат

Использование слухового аппарата

Уход за слуховым аппаратом

Привыкание к слуховому аппарату

Сервис

Возможные проблемы и их разрешение

Комплектность

Методы контроля

Гарантия

Свидетельство о продаже

Условия транспортировки, хранения/Способ утилизации СА

Гарантийный талон № 1

Наименование медицинского изделия:

I. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» ("Like") по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, с принадлежностями, варианты исполнения:

I. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» ("Like") по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, с принадлежностями, варианты исполнения:

1. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» ("Like") по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b8DP B13» ("Like b8DP B13") в составе:
 - Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» ("Like") по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b8DP B13» ("Like b8DP B13") - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» ("Like") по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b12DP B13» ("Like b12DP B13") в составе:
 - Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» ("Like") по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b12DP B13» ("Like b12DP B13") - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);

- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b16DP B13» (“Like b16DP B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b16DP B13» (“Like b16DP B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

4. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b20DP B13» (“Like b20DP B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b20DP B13» (“Like b20DP B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости);
5. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n8DP+ B13» (“Like n8DP+ B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n8DP+ B13» (“Like n8DP+ B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

6. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n12DP+ B13» (“Like n12DP+ B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n12DP+ B13» (“Like n12DP+ B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

7. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n16DP+ B13» (“Like n16DP+ B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n16DP+ B13» (“Like n16DP+ B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);

- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
8. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n20DP+ B13» (“Like n20DP+ B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n20DP+ B13» (“Like n20DP+ B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
9. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-

2017, вариант исполнения «Лайк n8DSP B675» (“Like n8DSP B675”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n8DSP B675» (“Like n8DSP B675”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

10. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n12DSP B675» (“Like n12DSP B675”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n12DSP B675» (“Like n12DSP B675”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

11. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n16DSP B675» (“Like n16DSP B675”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n16DSP B675» (“Like n16DSP B675”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

12. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n20DSP B675» (“Like n20DSP B675”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n20DSP B675» (“Like n20DSP B675”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

13. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк s8DSP B13» (“Like s8DSP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк s8DSP B13» (“Like s8DSP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

14. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк s12DSP B13» (“Like s12DSP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк s12DSP B13» (“Like s12DSP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

15. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк s16DSP B13» (“Like s16DSP B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения Лайк s16DSP B13 (“Like s16DSP B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

16. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк s20DSP B13» (“Like s20DSP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк s20DSP B13» (“Like s20DSP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

17. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n6DP B13» (“Like n6DP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n6DP B13» (“Like n6DP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

18. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n16DP B13» (“Like n16DP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n16DP B13» (“Like n16DP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

19. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DS B312» (“Like r17DS B312”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-

Паспорт. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, с принадлежностями, варианты исполнения

Поздравляем вас с удачным приобретением!

Мы очень рады, что вы выбрали нашу продукцию – независимо от того, знакомы вы с ней или приобретаете слуховой аппарат компании “Аурика” впервые. Для нас приятно знать, что все больше и больше людей в нашей стране используют слуховые аппараты Augica, предпочитая их аналогам других марок. Но вдвойне приятно видеть, как люди, однажды купившие аппарат Augica, в дальнейшем становятся нашими постоянными клиентами и настоящими друзьями.

Мы приложили все усилия к тому, чтобы сделать наши слуховые аппараты еще лучше – ведь мы знаем, как важно, чтобы слуховой аппарат был надежным, современным и удобным в использовании. Мы хотим, чтобы вы, покупая аппарат Augica, получили то, в чем нуждались больше всего – возможность радоваться жизни без ограничений.

Давайте слышать вместе!
Компания “Аурика”.

Содержание

Наименование медицинского изделия

Общая информация. Внешний вид слухового аппарата (СА)

Советы по использованию/Правила безопасности

Показания к применению/Область применения/Влияние на водителей

Безопасность использования

Предостережения/Предупреждения

Противопоказания

Замена батареек

Способ утилизации батареек

Включение и выключение аппарата

Как правильно надеть и снять слуховой аппарат

Использование слухового аппарата

Уход за слуховым аппаратом

Привыкание к слуховому аппарату

Сервис

Возможные проблемы и их разрешение

Комплектность

Методы контроля

Гарантия

Свидетельство о продаже

Условия транспортировки, хранения/Способ утилизации СА

Гарантийный талон № 1

Наименование медицинского изделия:

I. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, с принадлежностями, варианты исполнения:

I. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, с принадлежностями, варианты исполнения:

1. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b8DP B13» (“Like b8DP B13”) в составе:
 - Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b8DP B13» (“Like b8DP B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
2. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b12DP B13» (“Like b12DP B13”) в составе:
 - Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b12DP B13» (“Like b12DP B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);

- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
3. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b16DP B13» (“Like b16DP B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b16DP B13» (“Like b16DP B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

4. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b20DP B13» (“Like b20DP B13”) в составе:
 - Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк b20DP B13» (“Like b20DP B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости);

5. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n8DP+ B13» (“Like n8DP+ B13”) в составе:
 - Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n8DP+ B13» (“Like n8DP+ B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
6. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n12DP+ B13» (“Like n12DP+ B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n12DP+ B13» (“Like n12DP+ B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
7. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n16DP+ B13» (“Like n16DP+ B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n16DP+ B13» (“Like n16DP+ B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);

- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
8. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n20DP+ B13» (“Like n20DP+ B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n20DP+ B13» (“Like n20DP+ B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
9. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-

2017, вариант исполнения «Лайк n8DSP B675» (“Like n8DSP B675”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n8DSP B675» (“Like n8DSP B675”) - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации/паспорт;

- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);

- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);

- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);

- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);

- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);

- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);

- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);

- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

10. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n12DSP B675» (“Like n12DSP B675”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n12DSP B675» (“Like n12DSP B675”) - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации/паспорт;

- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);

- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);

- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);

- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);

- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);

- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

11. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n16DSP B675» (“Like n16DSP B675”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n16DSP B675» (“Like n16DSP B675”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

12. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n20DSP B675» (“Like n20DSP B675”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n20DSP B675» (“Like n20DSP B675”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

13. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк s8DSP B13» (“Like s8DSP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк s8DSP B13» (“Like s8DSP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

14. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк s12DSP B13» (“Like s12DSP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк s12DSP B13» (“Like s12DSP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

15. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк s16DSP B13» (“Like s16DSP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения Лайк s16DSP B13» (“Like s16DSP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
16. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк s20DSP B13» (“Like s20DSP B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк s20DSP B13» (“Like s20DSP B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
17. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n6DP B13» (“Like n6DP B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n6DP B13» (“Like n6DP B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

18. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n16DP B13» (“Like n16DP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n16DP B13» (“Like n16DP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

19. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DS B312» (“Like r17DS B312”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-

2017, вариант исполнения «Лайк r17DS B312» (“Like r17DS B312”) - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 312 - 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

20. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DS+ B312» (“Like r17DS+ B312”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DS+ B312» (“Like r17DS+ B312”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 312 - 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

21. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r9DM B13» (“Like r9DM B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r9DM B13» (“Like r9DM B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

22. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DM B13» (“Like r17DM B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DM B13» (“Like r17DM B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

23. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DM+ B13» (“Like r17DM+ B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DM+ B13» (“Like r17DM+ B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

24. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r9DP B13» (“Like r9DP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r9DP B13» (“Like r9DP B13”) - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

25. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DP B13» (“Like r17DP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DP B13» (“Like r17DP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
26. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DP+ B13» (“Like r17DP+ B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DP+ B13» (“Like r17DP+ B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
27. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r9DSP B675» (“Like r9DSP B675”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r9DSP B675» (“Like r9DSP B675”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);

- Комплект цветowych маркероv левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

28. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DSP B675» (“Like r17DSP B675”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DSP B675» (“Like r17DSP B675”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркероv левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

29. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DSP+ B675» (“Like r17DSP+ B675”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк r17DSP+ B675» (“Like r17DSP+ B675”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;

- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

30. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк о6DS B312» (“Like о6DS B312”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк о6DS B312» (“Like о6DS B312”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 312 - 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

31. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк o8DS B312» (“Like o8DS B312”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк o8DS B312» (“Like o8DS B312”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 312 - 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
32. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк o10DS B312» (“Like o10DS B312”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк o10DS B312» (“Like o10DS B312”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 312 - 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

33. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк о6DM B13» (“Like о6DM B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк о6DM B13» (“Like о6DM B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

34. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк о8DM B13» (“Like о8DM B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-

2017, вариант исполнения «Лайк o8DM B13» (“Like o8DM B13”) - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

35. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк o10DM B13» (“Like o10DM B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк o10DM B13» (“Like o10DM B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
36. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк o6DSP B13» (“Like o6DSP B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк o6DSP B13» (“Like o6DSP B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
37. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк o8DSP B13» (“Like o8DSP B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк o8DSP B13» (“Like o8DSP B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

38. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк o10DSP B13» (“Like o10DSP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк o10DSP B13» (“Like o10DSP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

39. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n2412DSP B675» (“Like n2412DSP B675”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-

2017, вариант исполнения «Лайк n2412DSP B675» (“Like n2412DSP B675”) - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

40. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n2416DSP B675» (“Like n2416DSP B675”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк n2416DSP B675» (“Like n2416DSP B675”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
41. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m2412DM+ B13» (“Like m2412DM+ B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m2412DM+ B13» (“Like m2412DM+ B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
42. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m3216DM+ B13» (“Like m3216DM+ B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m3216DM+ B13» (“Like m3216DM+ B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

43. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m4820DM+ B13» (“Like m4820DM+ B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m4820DM+ B13» (“Like m4820DM+ B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
44. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m2412DP B13» (“Like m2412DP B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m2412DP B13» (“Like m2412DP B13”) - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

45. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m3216DP B13» (“Like m3216DP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m3216DP B13» (“Like m3216DP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
46. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m4820DP B13» (“Like m4820DP B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m4820DP B13» (“Like m4820DP B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
47. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк a2412DM B13» (“Like a2412DM B13”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m4820DP B13» (“Like m4820DP B13”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);

- Комплект цветowych маркероv левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

48. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк a3216DM B13» (“Like a3216DM B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк a3216DM B13» (“Like a3216DM B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркероv левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

49. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк a4820DM B13» (“Like a4820DM B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк a4820DM B13» (“Like a4820DM B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при

необходимости);

- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

50. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» ("Like") по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m2412DM B13» ("Like m2412DM B13") в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» ("Like") по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m2412DM B13» ("Like m2412DM B13") - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);

- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

51. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m3216DM B13» (“Like m3216DM B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m3216DM B13» (“Like m3216DM B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

52. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m4820DM B13» (“Like m4820DM B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m4820DM B13» (“Like m4820DM B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

53. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк h8DP B13» (“Like h8DP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк h8DP B13» (“Like h8DP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

54. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк h12DP B13» (“Like h12DP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк h12DP B13» (“Like h12DP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);

- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

55. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк h16DP B13» (“Like h16DP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк h16DP B13» (“Like h16DP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

56. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m10DM B312» (“Like m10DM B312”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m10DM B312» (“Like m10DM B312”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Батарея размера 312 - 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
 - Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)
57. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m12DM B312» (“Like m12DM B312”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m12DM B312» (“Like m12DM B312”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 312 - 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

58. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m16DM B312» (“Like m16DM B312”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m16DM B312» (“Like m16DM B312”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 312 - 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

59. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m20DM B312» (“Like m20DM B312”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m20DM B312» (“Like m20DM B312”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);

- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 312 - 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

60. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m24DM B312» (“Like m24DM B312”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m24DM B312» (“Like m24DM B312”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 312 - 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

61. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения

цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m10DP B13» (“Like m10DP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m10DP B13» (“Like m10DP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

62. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m12DP B13» (“Like m12DP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m12DP B13» (“Like m12DP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

63. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m16DP B13» (“Like m16DP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m16DP B13» (“Like m16DP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

64. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m20DP B13» (“Like m20DP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m20DP B13» (“Like m20DP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

65. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m24DP B13» (“Like m24DP B13”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк m24DP B13» (“Like m24DP B13”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 13 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

66. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк a100DS B675» (“Like a100DS B675”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк a100DS B675» (“Like a100DS B675”) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации/паспорт;
- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

67. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк a100DM B675» (“Like a100DM B675”) в составе:
- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк a100DM B675» (“Like a100DM B675”) - 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации/паспорт;
 - Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);
 - Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Каблук для программирования - 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
 - Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);

- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

68. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк a100DP B675» (“Like a100DP B675”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк a100DP B675» (“Like a100DP B675”) - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации/паспорт;

- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);

- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветowych маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

69. Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк a100DSP B675» (“Like a100DSP B675”) в составе:

- Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017, вариант исполнения «Лайк a100DSP B675» (“Like a100DSP B675”) - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации/паспорт;

- Программное обеспечение для программирования Аурика - 1 шт; (при необходимости);

- Адаптер для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Каблучок для программирования - 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, правый – 1 шт. (при необходимости);
- Шнур программирования, левый – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);

- Ушной вкладыш, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Ушной вкладыш, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Комплект цветных маркеров левый и правый – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4 – 1 шт. (при необходимости);
- Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5 – 1 шт. (при необходимости);
- Батарея размера 675 – 10 упаковок по 6 шт. (при необходимости);
- Детский рожок – не более 10 шт. (при необходимости)

II. Принадлежности:

1. Переходник под 13 элемент (для моделей «Лайк n8DSP B675» (“Like n8DSP B675”), «Лайк n12DSP B675» (“Like n12DSP B675”), «Лайк n16DSP B675» (“Like n16DSP B675”), «Лайк n20DSP B675»), «Лайк r9DSP B675» (“Like r9DSP B675”), «Лайк r17DSP B675» (“Like r17DSP B675”), «Лайк r17DSP+ B675» (“Like r17DSP+ B675”), «Лайк n2412DSP B675» (“Like n2412DSP B675”), «Лайк n2416DSP B675» (“Like n2416DSP B675”), «Лайк a100DS B675» (“Like a100DS B675”), «Лайк a100DM B675» (“Like a100DM B675”), «Лайк a100DP B675» (“Like a100DP B675”), «Лайк a100DSP B675» (“Like

Примечание:

1. Принадлежности могут поставляться в любом количестве по заявке покупателя, но не более 10 шт.
2. Комплектность элемента питания в соответствии с техническими требованиями слухового аппарата.

Назначение медицинского изделия:

Медицинское изделие предназначено для звукоусиления по воздушному звукопроведению в целях компенсации потерь слуха от слабых до глубоких, для людей всех возрастов, в том числе, для детей и подростков.

Область применения:

Сурдология.

Предусмотренные пользователи:

Данное медицинское изделие предназначено для применения одним пациентом и может использоваться в медицинских организациях или на дому.

Показания к применению

- нейросенсорная тугоухость степенью от легкой до тяжелой
- кондуктивная тугоухость при невозможности ее терапевтического лечения

Противопоказания

- Записи об активном выходе жидкости из уха в течение предыдущих 90 дней.
- Записи о резком быстро прогрессирующем ухудшении слуха в течение предшествующих 90 дней.
- Острое или хроническое головокружение.
- Резкое или недавно начавшееся ухудшение слуха с одной стороны в течение предыдущих 90 дней.
- Видимые признаки наличия большого количества ушной серы или инородного предмета в ушном канале.
- Боль или ощущение дискомфорта в ухе.
- Видимая деформация уха, врожденная или полученная в результате травм.
- Нарушение функции вестибулярного аппарата.
- Острое воспаление и обострение хронических воспалительных процессов в наружном и среднем ухе.
- Первые месяцы после церебрального менингита и слухоулучшающих операций.
- Наличие аллергической непереносимости ушных вкладышей.
- Гиперчувствительность к материалам изготовления СА, его компонентов или принадлежностей

Возможные побочные действия при применении СА:

- Выделения из уха
- Аллергическая реакция
- Дискомфорт или раздражение в ухе
- Повреждение остатков слуха при настройке и использовании слухового аппарата с максимальном УЗД
- Повышение утомляемости

Советы по использованию/Правила безопасности

Слуховые аппараты Лайк (Like) предназначены для компенсации потерь слуха различной степени тяжести.

В слуховых аппаратах Лайк (Like) используются современные технологии производства: нанопокрывание, обеспечивающее защиту аппарата от влаги и грязи; комплектующие ведущих мировых производителей; ударопрочный пластиковый корпус. Это обеспечивает высокую надежность изделий и отличное качество звучания.

Перед тем, как начать пользоваться слуховым аппаратом, внимательно ознакомьтесь с приведёнными ниже правилами безопасности и другими сведениями, содержащимися в данной инструкции.

Пожалуйста, обратите внимание на следующие пункты:

- Предохраняйте слуховой аппарат от механических воздействий.
- Не подвергайте аппарат чрезмерному воздействию влаги (дождь, сауна, душ, парник и т. д.).
- Снимайте аппарат при нанесении средств по уходу за телом, волосами (лак для волос, крем для тела и т. д.).
- Если Ваш аппарат намок, не пытайтесь высушить его, подвергая высоким температурам (феном, в микроволновой печи, плите).

- Высокие температуры приводят к неисправности аппарата, поэтому избегайте также непосредственного попадания на аппарат прямых солнечных лучей.
- Если Вы долгое время не пользуетесь аппаратом, удалите из него батарейку.
- Ремонт аппарата должен производиться только специалистом.
- Снимайте аппарат при медицинских осмотрах (к примеру, рентген, компьютерная томография и т. д.).
- Храните батарейки отдельно от лекарств. Их можно легко спутать с таблетками.
- Слуховые аппараты, детали к ним и батарейки необходимо хранить в местах, недоступных для детей, домашних животных и лиц с психическими отклонениями.
- Будьте осторожны с протёкшими батарейками. Содержащаяся в них жидкость вредна для здоровья.
- Если Вы проглотили батарейку, немедленно обратитесь к врачу.

Влияние на водителей

Аппарат может прекратить функционировать без предупреждения. Всегда помните об этом при дорожном движении, в ситуациях, зависимых от предупредительных сигналов.

Безопасность использования

- Используйте слуховые аппараты как предписано.
- Слуховые аппараты должны быть настроены обученным специалистом.
- Слуховые аппараты не восстанавливают естественный слух и не могут предотвратить дальнейшее снижение слуха, вызванное органическими причинами.
- Никогда не берите слуховой аппарат или батареи в рот, Вы можете их легко проглотить.
- Храните батареи отдельно от медикаментов, их легко перепутать с таблетками.
- Если батареи или аппараты были проглочены, следует немедленно обратиться к врачу.
- Сразу обратитесь к врачу, если аппарат или вкладыш вызывают выделения из уха или аллергическую реакцию.
- Обратитесь к специалисту, если Вы чувствуете дискомфорт или раздражение в ухе.
- Никогда не вставляйте инструменты очистки в отверстия выхода звука и микрофона. Это может повредить слуховой аппарат.
- Не оставляйте слуховой аппарат на жаре в машине, рядом с радиатором и пр.
- Не используйте слуховой аппарат при плавании, подводном плавании или нырянии.
- Не опускайте аппарат в воду или другие жидкости.
- Рекомендуется снимать аппарат перед сном.
- Для безопасности, держите аппарат в футляре, когда вы им не пользуетесь.

Предостережения

- Никогда не позволяйте другим лицам использовать Ваши слуховые аппараты, потому что они настроены для Вашей потери слуха и могут ухудшить слух другого человека.
- Будьте внимательны: удар по уху с надетым слуховым аппаратом может привести к серьезным повреждениям. Избегайте использования аппарата при контактных видах спорта.
- Слуховые аппараты, запасные части, батареи должны находиться вне пределов досягаемости людей, которые их могут проглотить.
- Не меняйте батарею и не настраивайте регуляторы вблизи детей или душевнобольных людей.
- Будьте осторожны при вытекании жидкости из аппарата. Батарейная жидкость может вызывать раздражение на коже.
- Никогда не пытайтесь перезарядить одноразовые батареи.
- Не меняйте батарею и не настраивайте регуляторы вблизи детей или душевнобольных людей.
- Снимайте Ваш слуховой аппарат перед использованием спрея после бритья, или спрея для волос, масел, парфюмерии, репеллентов, лосьонов и пр.
- Если на Ваш аппарат попало одно из этих средств, высушите аппарат перед его использованием.
- Пациент может подвергаться воздействию материалов контактирующих частей, СА, его компонентов или принадлежностей. Убедитесь в отсутствии гиперчувствительности к этим материалам:

№ п/п	Наименование части	Материалы, из которых изготовлена контактирующая часть
1	Корпус, батарейный отсек,	Акрилонитрилбутадиенстирол

	кнопки переключения	
2	Звукопроводящая трубка OpenFit, ушной вкладыш	Полихлорвиниловый пластикат
3	Рожок, детский рожок	Поликарбонат
4	Футляр	Акрилонитрилбутадиенстирол
5	Окно светодиодной индикации	Поликарбонат
6	Регулятор громкости	Акрилонитрилбутадиенстирол
7	Цветовой маркер левый (красный)	Акрилонитрилбутадиенстирол, краситель красный
8	Цветовой маркер правый (синий)	Акрилонитрилбутадиенстирол, краситель синий
9	Блокиратор батарейного отсека	Поликарбонат
10	Аудио-шнур	Разъем, оплетка - каучук синтетический бутадиеннитрильный

Предупреждения

Особенную осторожность нужно проявлять при настройке и использовании слухового аппарата с максимальным УЗД, возможен риск повреждения остатков слуха у пользователя слуховыми аппаратами.

Сведения о совместимости слухового аппарата с другими (медицинскими или немедицинскими) изделиями и разрешающих документах, и ограничениях по совместному применению с другими изделиями

Слуховой аппарат совместим с медицинским изделием «Сигнализатор звука цифровой со световой и вибрационной индикацией для глухих, слабослышащих и пожилых людей «ВИБРАТОН» по ТУ 26.30.11-012-81271212-2017» производства ООО «Аурика», регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7629 от 04.12.2020 г.

Не следует использовать совместно с аппаратом сторонние принадлежности (не перечисленные в разделе «Наименование медицинского изделия» данного руководства.

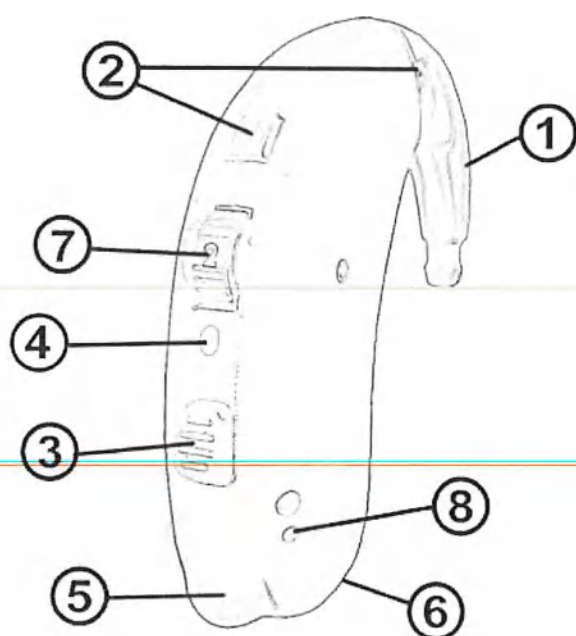



Рис.1. Внешний вид слуховых аппаратов Лайк (Like)

- 1 – Рожок;
- 2 – Микрофон(ы);
- 3 – Кнопка переключения программ;
- 4 – Светодиодная индикация;
- 5 – Батарейный отсек (вкл./выкл.)
- 6 – Цветовой маркер (опция):
КРАСНЫЙ для ПРАВОГО уха,
СИНИЙ для ЛЕВОГО уха;
- 7 – Регулятор громкости (аналоговый);
- 8 – Блокиратор батарейного отсека (опция);

Описание состава и принадлежностей

Адаптер для программирования

Предназначен для программирования СА врачом сурдологом/аудиологом. Обеспечивает связь между СА и программатором. Подключается с помощью шнуров для программирования левого и правого к слуховому аппарату с одной стороны, и к программатору – с другой.

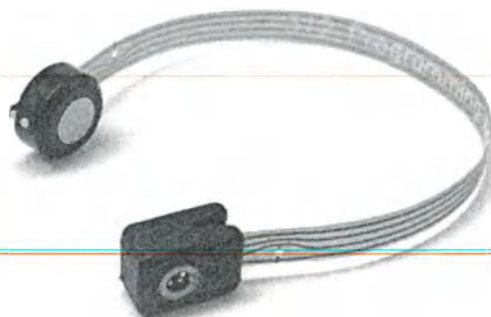

Наименование \ Параметр	Длина, мм, $\pm 5\%$	Масса, г, $\pm 5\%$
Адаптер для программирования	100	0,5

Способ подключения СА к адаптеру с помощью шнура для программирования приведен в разделе «Способы подключения СА к адаптеру и каблучку».

Каблучок для программирования

Предназначен для программирования СА врачом сурдологом/аудиологом. Обеспечивает связь между СА и программатором. Подключается с помощью шнуров для программирования левого и правого к слуховому аппарату с одной стороны, и к программатору – с другой.




Наименование \ Параметр	Габаритные размеры, мм, $\pm 5\%$	Масса, г, $\pm 5\%$
Каблучок для программирования	12x14x7	0,6

Способ подключения СА к каблучку с помощью шнура для программирования приведен в разделе «Способы подключения СА к адаптеру и каблучку».

Элемент питания


Элементы питания предназначены для питания СА. Размер батареи зависит от конкретной модели СА.

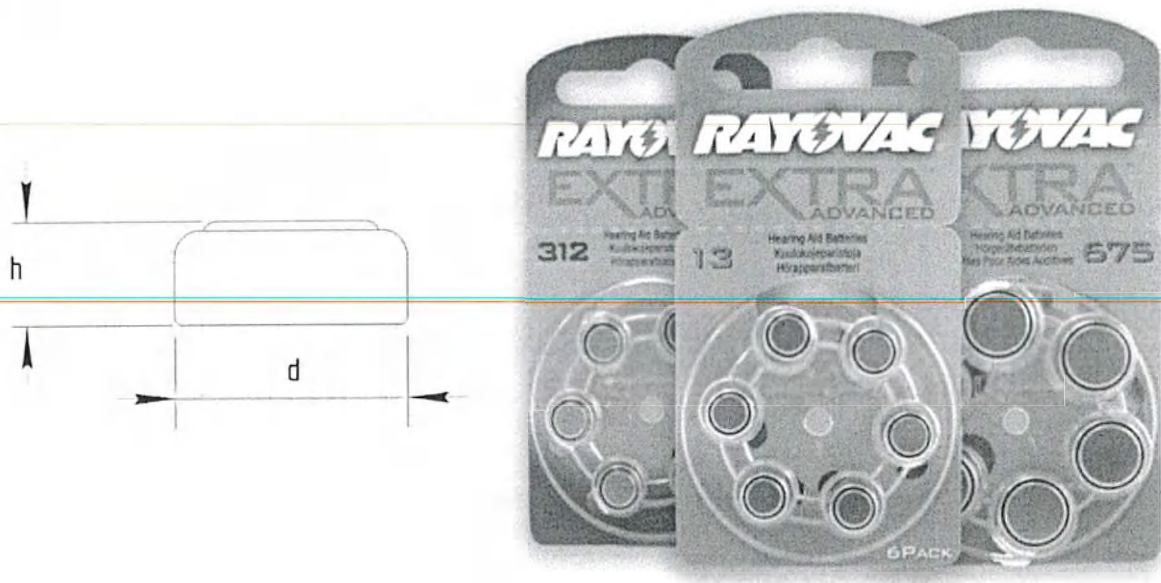

Наименование \ Параметр	h, мм, ±5%	d, мм, ±5%	Масса, г, ±5%	Напряжение, В, ±10%
Батарея размера 13	5,4	7,9	0,86	1,4
Батарея размера 312	3,6	7,9	0,53	1,4
Батарея размера 675	5,4	11,6	1,77	1,4

Детский рожок


Предназначен для фиксации СА на ушной раковине пользователя. Имеет меньшие габаритные размеры, в сравнении со стандартным рожком.

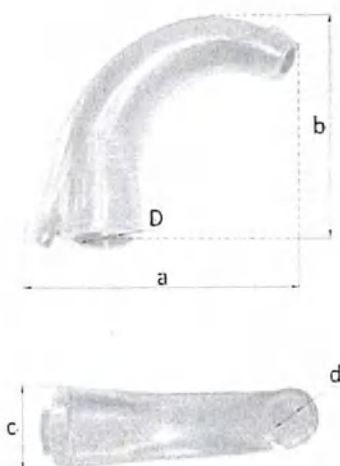

Параметр Наименование	a, мм, ±5%	b, мм, ±5%	c, мм, ±5%	d, мм, ±5%	D, мм, ±5%	Масса, г, ±5%
Детский рожок	16,5	13	5	1,3	3	0,20

Звукопроводящая трубка Open Fit

Предназначена для передачи звукового сигнала от СА в ушной проход пользователя через ушной вкладыш. Звукопроводящая трубка подсоединяется одним концом к рожку СА, а другим концом к ушному вкладышу пользователя, и служит для обеспечения звукопроводения. Предусмотрены размеры звукопроводящей трубки от 1 до 5 (длиной от 23 до 45 мм). Рекомендуется выбирать размер по индивидуальным показаниям, исходя из назначений врача сурдолога.

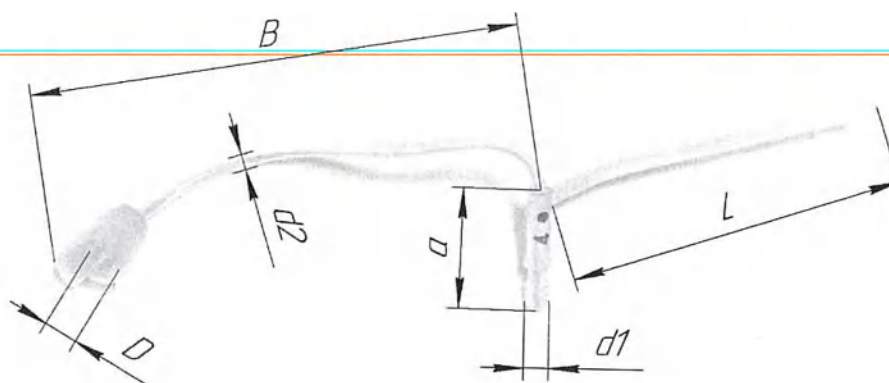

Параметр Наименование	L, мм, ±5%	d1, мм, ±5%	d2, мм, ±5%	a, мм, ±5%	D, мм, ±5%	B, мм, ±5%	Масса, г, ±5%
Правая/левая трубочка OpenFit, размер 1	32	2,5	1,3	12,8	3,3	23	0,20
Правая/левая трубочка OpenFit, размер 2	32	2,5	1,3	12,8	3,3	29,7	0,20
Правая/левая трубочка OpenFit, размер 3	32	2,5	1,3	12,8	3,3	33	0,21
Правая/левая трубочка OpenFit, размер 4	32	2,5	1,3	12,8	3,3	37,5	0,21
Правая/левая трубочка OpenFit, размер 5	32	2,5	1,3	12,8	3,3	45	0,22

Переходник под 13 элемент


Предназначен для использования элементов питания размера 13 в моделях СА, где по умолчанию используется элемент питания размера 675.



Наименование \ Параметр	Длина, мм, ±5%	Ширина, мм, ±5%	Высота, мм, ±5%	Масса, г, ±5%
Переходник под 13 элемент	11,5	10	5	0,27

Элемент питания

Элементы питания предназначены для питания СА. Размер батареи зависит от конкретной модели СА. Способ установки и замены батареек приведен в настоящем Руководстве ниже (см. раздел «Замена батареек»).

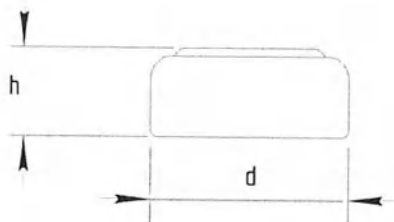

Наименование \ Параметр	h, мм, ±5%	d, мм, ±5%	Масса, г, ±5%	Напряжени е, В, ± 10%
Батарея размера 13	5,4	7,9	0,86	1,4
Батарея размера 312	3,6	7,9	0,53	1,4

Батарея размера 675	5,4	11,6	1,77	1,4
---------------------	-----	------	------	-----

Футляр с зарядным устройством для поддерживаемых моделей согласно таблице 1



Наименование \ Параметр	Длина, мм, $\pm 5\%$	Высота, мм, $\pm 5\%$	Ширина, мм, $\pm 5\%$	Масса, г, $\pm 5\%$
Футляр/зарядное устройство для поддерживаемых моделей согласно таблице 1	75	60	75	92

Футляр (является упаковкой медицинского изделия)


Предназначен для хранения СА конечным пользователем.




Наименование	Длина, мм, $\pm 5\%$	Высота, мм, $\pm 5\%$	Ширина, мм, $\pm 5\%$	Масса, г, $\pm 5\%$
Футляр	63	25	63	35,97

Аудио-шнур

Предназначен для прослушивания через СА звуков из внешних устройств, оснащенных разъемом DC Jack 3.5 (например, плеера, смартфона и т.д.). Способ подключения аудио-шнура к СА описан в разделе «Порядок работы с аудиовходом».

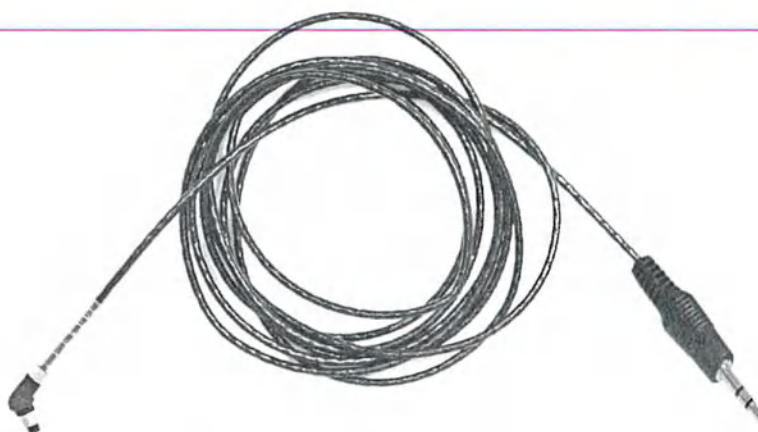


Параметр	Длина, мм, $\pm 5\%$	Масса, г, $\pm 5\%$	Тип разъемов
Наименование Аудио-шнур	1250	15	Четырехконтактная вилка (CS44) с одной стороны по ГОСТ Р МЭК 60118-14- 2003 Разъем DC Jack 3.5x1.5

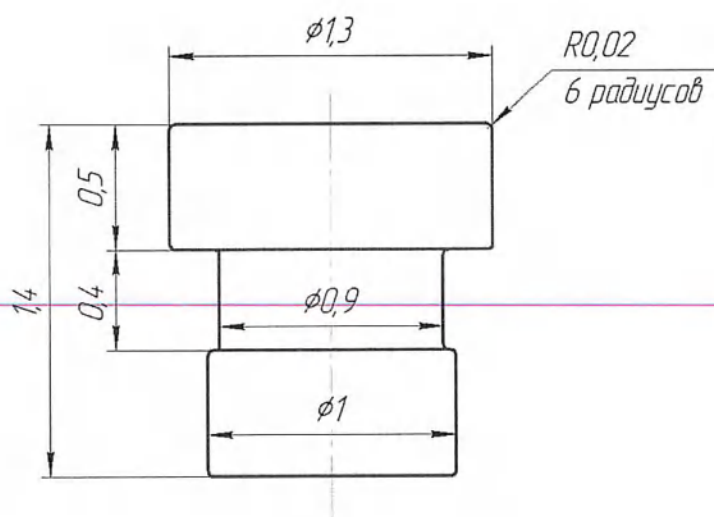

Цветовые маркеры лев./прав.

Параметр	Диаметр, мм, $\pm 5\%$	Высота, мм, $\pm 5\%$	Масса, г, $\pm 5\%$
Наименование			
Цветовые маркеры лев./прав.	1,3	1,4	$1,2 \times 10^{-3}$

Предназначен для хранения СА конечным пользователем.

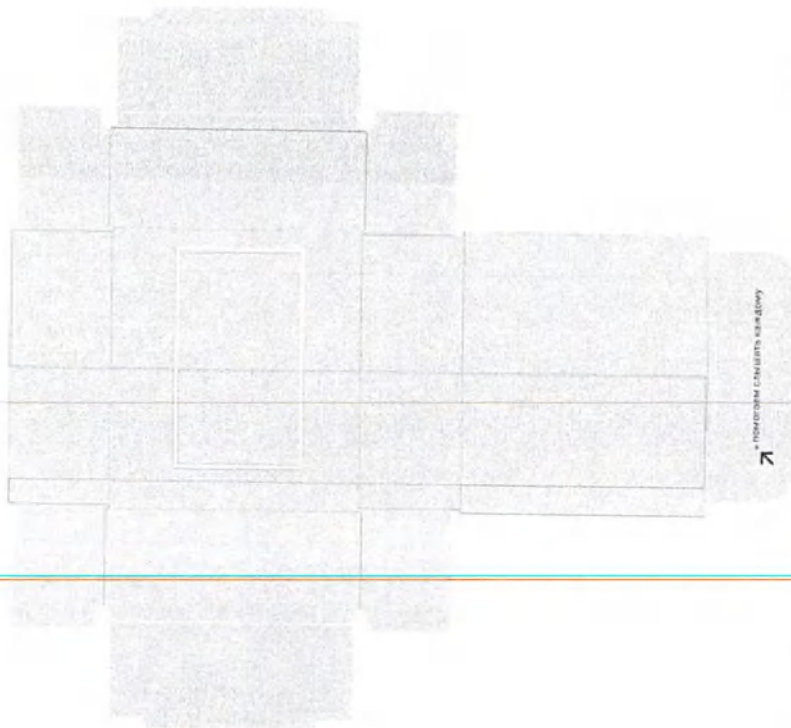

Наименование	Параметр	Длина, мм, $\pm 5\%$	Высота, мм, $\pm 5\%$	Ширина, мм, $\pm 5\%$	Масса коробки, г, $\pm 5\%$	Масса коробки с обечайкой, г, $\pm 5\%$
	упаковка	124	42	95	24	35



Наименование	Параметр	Длина, мм, $\pm 5\%$	Масса, г, $\pm 5\%$
Шнур для программирования, Левый		2600	21
Шнур для программирования, Правый		2600	21

Способ подключения СА к адаптеру и каблучку с помощью шнура для программирования приведен в разделе «Способы подключения СА к адаптеру и каблучку».



Наименование	Параметр	Тип носителя	Версия ПО, не менее
Программное обеспечение для программирования Аурика		CD	1.0.4

Ожидаемый срок службы – 5 лет.

Способы подключения СА к адаптеру и каблучку


Разъем программирования на слуховом аппарате располагается, в батарейном отсеке, на батарейном отсеке либо под толкателем кнопки.

Внимание! Красный цвет разъема шнура для программирования означает правую сторону, синий цвет – левую.

а) для моделей, которые имеют разъем в батарейном отсеке, необходимо использовать адаптер для программирования, как показано на рисунке ниже:

1. Плотно подсоедините разъем круглой формы адаптера для программирования к кромке батарейного отсека.
2. Закройте крышку батарейного отсека.
3. Подсоедините узкий разъем шнура для программирования (правого) к прямоугольному разъему адаптера со стороны, где имеется красная метка. Внимание! Метки должны совпадать.
4. Подсоедините узкий разъем шнура для программирования (левого) к прямоугольному разъему адаптера со стороны, где имеется синяя метка. Внимание! Метки должны совпадать.

5. Подсоедините противоположные (широкие) разъемы соответствующих шнуров для программирования к совместимому программатору (например, HI-PRO). Программатор в состав СА не входит и приобретается отдельно центрами слухопротезирования.

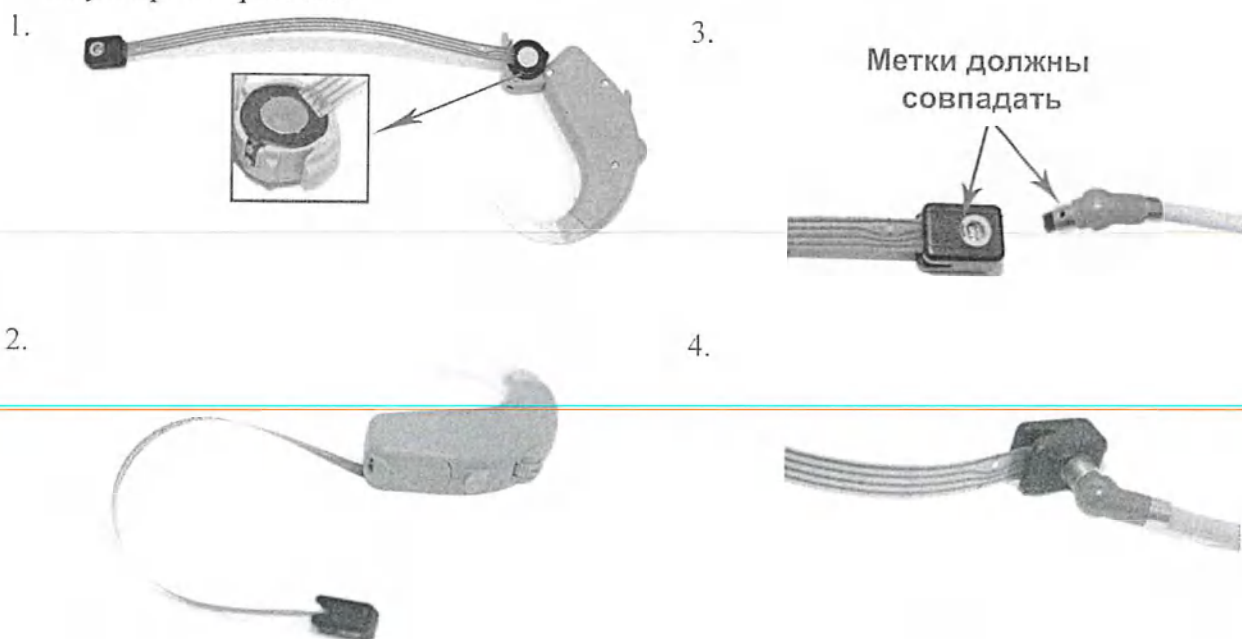

б) для моделей, которые имеют разъем на батарейном отсеке, необходимо использовать каблук для программирования, как показано на рисунке ниже:


1. Подключите каблук к разъему на батарейном отсеке СА, как показано на рисунке ниже.

2. Подсоедините к разъему каблучка узкий разъем шнура для программирования (правого) к прямоугольному разъему адаптера со стороны, где имеется красная метка.

Внимание! Метки должны совпадать.

3. Подсоедините противоположный (широкий) разъемы шнура для программирования (правого) к совместимому программатору (например, HI-PRO). Программатор в состав СА не входит и приобретается отдельно.

При подключении через каблук шнур для программирования (левый) не используется.

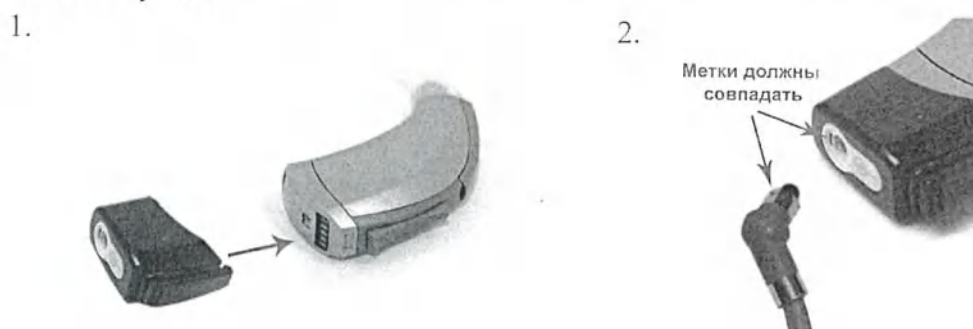

в) для моделей, которые имеют разъем под толкателем кнопки:

1. Подключите шнур для программирования (правый) к корпусу СА, как показано на рисунке ниже. Внимание! Метки должны совпадать.

2. Подсоедините противоположный (широкий) разъемы шнура для программирования (правого) к совместимому программатору (например, HI-PRO). Программатор в состав СА не входит и приобретается отдельно центрами слухопротезирования.



В таблице ниже приведен список моделей в зависимости от способа подключения.

Способ подключения	Модели, поддерживающие данный способ подключения
Разъем в батарейном отсеке	Все модели с 13 типом батареи
Разъем на батарейном отсеке	Все модели с 312 типом батареи
Разъем под толкателем кнопки.	Все модели с 675 типом батареи

Замена батарейки

Внимание!

Используйте элементы питания (батарейки), предназначенные специально для слуховых аппаратов! Использование неподходящих батареек (часовых и т. п.) может вывести слуховой аппарат из строя. В данном случае, гарантийное обслуживание на слуховой аппарат не распространяется!

Чтобы заменить батарейку:

1. Подцепите крышку батарейного отсека ногтем и полностью откройте её, не прикладывая чрезмерных усилий (Рис. 2).

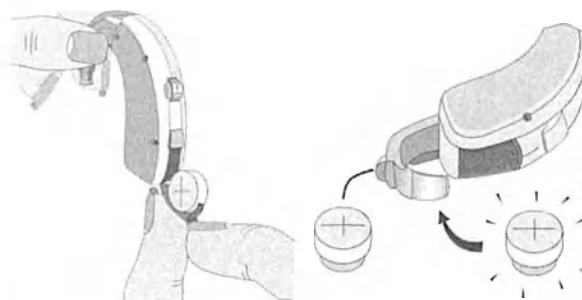


Рис. 2. Установка батарейки в слуховой аппарат

2. Достаньте старую батарейку.
 3. Возьмите новую батарейку, снимите с нее пленку и подождите в течение минуты для насыщения батарейки кислородом, что увеличит её энергоёмкость.
 4. Вставьте батарейку, соблюдая полярность.
 5. Плотно закройте крышку батарейного отсека. Кладите батарейку ТОЛЬКО в крышку батарейного отсека с соблюдением полярности! Если батарейка установлена неправильно, батарейный отсек закрывается с усилием. В этом случае необходимо изменить положение батарейки.
- Никогда не прикладывайте чрезмерных усилий при закрытии крышки батарейного отсека!

Снижение громкости и ухудшение качества звука, а иногда и самопроизвольное отключение аппарата, свидетельствуют о разряде батарейки.

В моем слуховом аппарате используется:

	675 батарейка (синяя маркировка)
	312 батарейка (коричневая маркировка)
	13 батарейка (оранжевая маркировка)

Способ утилизации батареек

Все бытовые элементы питания нуждаются в специальной утилизации. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды их не рекомендуется выбрасывать с обычным мусором. Использованные батарейки необходимо сдавать в специализированные пункты приема.

Включение и выключение аппарата

Для включения аппарата батарейным отсеком убедитесь, что в нем установлена батарейка (см. в разделе «Замена батареи») и плотно закройте крышку батарейного отсека до щелчка (Рис. 3).

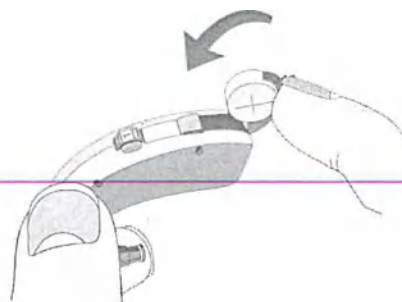


Рис. 3. Включение слухового аппарата батарейным отсеком

Для выключения аппарата приоткройте крышку батарейного отсека до щелчка (Рис. 4).

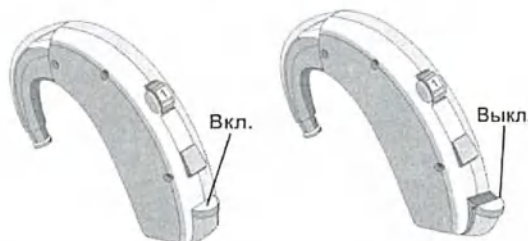


Рис. 4. Выключение слухового аппарата батарейным отсеком

Как правильно надеть и снять слуховой аппарат

Вначале нужно вставить ушной вкладыш в слуховой проход, а затем завести слуховой аппарат за ухо. Правый ушной вкладыш вводится правой рукой, а левый ушной вкладыш – левой.

Возьмите ушной вкладыш большим и указательным пальцем за нижнюю часть, как можно ближе к звуководу.

Верхняя часть ушного вкладыша должна быть направлена строго вверх. Канальная часть ушного вкладыша должна быть направлена к слуховому проходу.

При затруднении оттяните другой рукой мочку уха вниз или оттяните ушную раковину назад и вверх, легким давлением указательного пальца на ушной вкладыш введите его в ухо.

Направленная вверх завитковая часть должна встать на место.

Чтобы правильно ввести завитковую часть:

- Указательным пальцем постарайтесь завести ее под край кожной складки.
- Одновременно можно другой рукой оттянуть ухо вверх и назад.
- После того, как Вы вставили ушной вкладыш, аккуратно заведите слуховой аппарат за ухо.
- Старайтесь не перекрутить звукопроводящую трубку (Рис. 5).

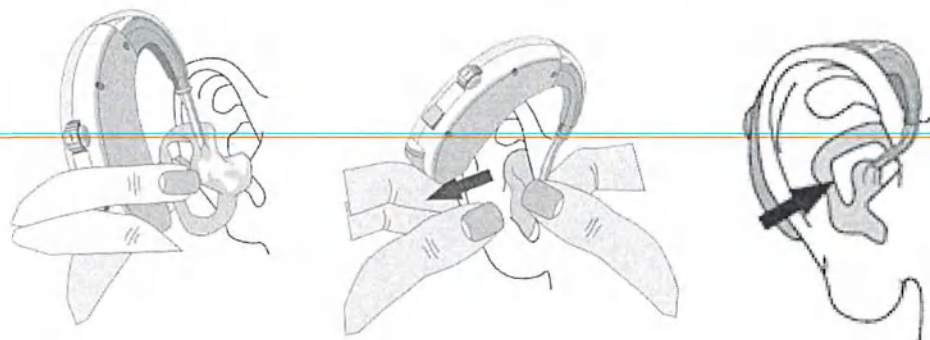


Рис. 5. Надевание слухового аппарата

Как снять аппарат

Выведите слуховой аппарат из-за уха.

Указательным пальцем высвободите завитковую часть ушного вкладыша.

Потяните завитковую часть ушного вкладыша вперед. Лёгким поворотом назад осторожно выньте ушной вкладыш из уха, держа его за завитковую часть.

Внимание! При снятии вкладыша не рекомендуется тянуть за звукопроводящую трубку, иначе звукопроводящая трубка может быть повреждена (надрыв), что потребует ремонта, либо замены вкладыша.

Использование слухового аппарата

Регулировка уровня звука

Регулировка звука производится с помощью регулятора громкости (Рис. 6) от положения 1 (минимальная громкость) до положения 4 (максимальная громкость).

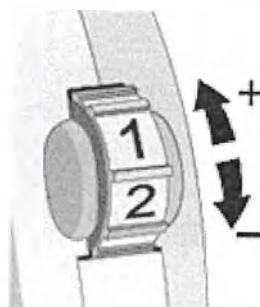


Рис. 6. Регулировка уровня звука

Если ваш слуховой аппарат оснащен цифровым регулятором громкости «Качели» (Рис. 7), для увеличения громкости нажмите на верхнюю часть регулятора, для уменьшения громкости нажмите на нижнюю часть регулятора.

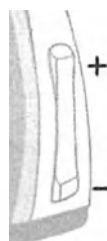


Рис. 7. Регулировка уровня звука цифровым регулятором

Выбор программы прослушивания

Выбор программы прослушивания осуществляется при помощи кнопки переключения программ (Рис. 8). В зависимости от ситуации, переключая программы можно выбрать необходимый режим прослушивания.



Рис. 8. Кнопка переключения программ

Порядок работы с аудиовходом.

1. К СА, оснащеному аудиовходом – подсоедините аудио-шнур.
2. Второй конец аудио-шнура (со штекером типа jack 3,5 мм) подключите к внешнему источнику сигнала (например, смартфону, плееру и т.д.).
3. Вы можете изменять уровень громкости, как при работе от встроенного в СА микрофона – регулятором громкости на СА, а также непосредственно, на источнике звука (к которому в настоящий момент подключен СА).

Работа СА в режиме индукционной катушки

Работа СА в режиме индукционной катушки полностью соответствует работе СА в других режимах и используется в местах, оборудованных специальными устройствами беспроводной связи (эти места обозначаются знаком «Перечеркнутое ухо» ). В этом режиме воспринимаете только полезные звуки (речь или музыку) без фонового шума. Режим индукционной катушки можно использовать при разговоре по телефону. Для использования этого режима необходимо выбрать соответствующую программу.

Технические параметры СА

Параметры СА, измеренные в эталонной камере объемом 2 см³ по ГОСТ Р МЭК 60318-5, должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица №1

Модель СА/ Параметры СА		b8DP B13	b12DP B13	b16DP B13	b20DP B13
1	Максимальный ВУЗД90, дБ	Рожок	133	133	133
		Трубка Open Fit	126	126	126
2	Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ±4 дБ от максимального	Рожок	129-137	129-137	129-137
		Трубка Open Fit	122-130	122-130	122-130
3 № типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В		1	1	1	1
4	Максимальное акустическое усиление, дБ	Рожок	63	63	63
		Трубка Open Fit	55	55	55
5	Пределы отклонений акустического усиления ±5 дБ от максимального	Рожок	58-68	58-68	58-68
		Трубка	50-60	50-60	50-60
		Open Fit			
6 № типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г		1	1	1	1
7	Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ±5 дБ	Рожок	52	52	52
		Трубка Open Fit	46	46	46
8 Основная частотная характеристика, Гц **		100-7100	100-7100	100-7100	100-7100
9 Потребляемый ток (макс.), мА		1,2	1,2	1,2	1,2
10 Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ		19	19	19	19
11	Коэффициент гармоник (макс.),	500	3,0	3,0	3,0

Модель СА/ Параметры СА		b8DP	b12DP	b16DP	b20DP
		B13	B13	B13	B13
%	800	4,0	4,0	4,0	4,0
	1600	1,5	1,5	1,5	1,5
12 Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ	Рожок	107	107	107	107
	Трубка	98	98	98	98
	Open Fit				
13 Масса без источника питания, г, $\pm 0,5$		4	4	4	4
14 Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)		40x10x33	40x10x33	40x10x33	40x10x33
15 Тип батареек		13	13	13	13
16 Степень защиты по ГОСТ 14254		IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
17 Количество каналов		8	12	16	20
18 Количество программ		1-2	1-3	1-4	1-5
19 Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости		+	+	+	+
20 Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее		19	21	24	27
21 Количество полос эквалайзера		8	12	16	20
22 Подавление обратной связи		Адаптивное	Адаптивное	Бинауральное	Бинауральное
23 Шумоподавление		Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Бинауральное
24 Направленность		Адаптивная	Бинауральная	Бинауральная	Бинауральная
25 Кнопка переключения программ		+	+	+	+
26 Регулятор громкости		-	-	-	+

Модель СА/ Параметры СА	b8DP B13	b12DP B13	b16DP B13	b20DP B13
27 Аудиовход	+	+	+	+
28 Тиннитус-маскер	+	+	+	+
29 Светодиодная система	-	-	-	-
30 Авто телефон	-	-	-	+
31 Дневник	+	+	+	+
32 Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+

Продолжение таблицы № 2

Модель СА/ Параметры СА		n8DP+ B13	n12DP+ B13	n16DP+ B13	n20DP+ B13
1 Максимальный ВУЗД90, дБ	Рожок	140	140	140	140
	Трубка	135	135	135	135
	Open Fit				
2 Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ±4 дБ от максимального	Рожок	136-144	136-144	136-144	136-144
	Трубка	131-139	131-139	131-139	131-139
	Open Fit				
3 № типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В		2	2	2	2
4 Максимальное акустическое усиление, дБ	Рожок	75	75	75	75
	Трубка	68	68	68	68
	Open Fit				
5 Пределы отклонений акустического усиления ±5 дБ от максимального	Рожок	70-80	70-80	70-80	70-80
	Трубка	63-73	63-73	63-73	63-73
	Open Fit				

Модель СА/ Параметры СА		n8DP+	n12DP+	n16DP+	n20DP+
		B13	B13	B13	B13
6	№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	2	2	2	2
7	Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ±5 дБ	67	67	67	67
8	Основная частотная характеристика, Гц **	100-6400	100-6400	100-6400	100-6400
9	Потребляемый ток (макс.), мА	1,5	1,5	1,5	1,5
10	Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ	19	19	19	19
11	Коэффициент гармоник, %	500	4,0	4,0	4,0
		800	2,0	2,0	2,0
		1600	1,0	1,0	1,0
12	Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ	114	114	114	114
13	Масса без источника питания, г, ±0,5	5	5	5	5
14	Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)	40x10x33	40x10x33	40x10x33	40x10x33
15	Тип батарейки	13	13	13	13
16	Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
17	Количество каналов	8	12	16	20
18	Количество программ	1-2	1-3	1-4	1-5
19	Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	-	+	+	+
20	Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	19	21	24	27

Модель СА/ Параметры СА		n8DP+	n12DP+	n16DP+	n20DP+
		B13	B13	B13	B13
21	Количество полос эквалайзера	8	12	16	20
22	Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Бинауральное	Бинауральное
23	Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Бинауральное
24	Направленность	Адаптивная	Адаптивная/ автоматическ ая	Адаптивная/ бинауральная узколуцевая	Адаптивная/ бинауральная узколуцевая
25	Кнопка переключения программ	+	+	+	+
26	Регулятор громкости	+	+	+	+
27	Аудиовход	+	+	+	+
28	Тиннитус-маскер	-	-	-	-
29	Светодиодная система	-	-	-	-
30	Авто телефон	-	-	+	+
31	Дневник	+	+	+	+
32	Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+

Модель СА/ Параметры СА		n8DSP	n12DSP	n16DSP	n20DSP
		B675	B675	B675	B675
1	Максимальный ВУЗД90, дБ	Рожок	142	142	142
		Трубка	135	135	135
		Open Fit			
2	Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ±4 дБ от	Рожок	138-146	138-146	138-146
		Трубка	131-139	131-139	131-139
		Open Fit			

Модель СА/ Параметры СА		n8DSP B675	n12DSP B675	n16DSP B675	n20DSP B675
максимального					
3	№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	3	3	3	3
4	Максимальное	Рожок	82	82	82
	акустическое	Трубка			
	усиление, дБ	Open Fit	75	75	75
5	Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	Рожок	77-87	77-87	77-87
		Трубка			
		Open Fit	70-80	70-80	70-80
6	№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	3	3	3	3
7	Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	73	73	73	73
8	Основная частотная характеристика, Гц **	100-4900	100-4900	100-4900	100-4900
9	Потребляемый ток (макс.), мА	2,5	2,5	2,5	2,5
10	Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ	19	19	19	19
11	Коэффициент гармоник, %	500	4,0	4,0	4,0
		800	2,0	2,0	2,0
		1600	1,0	1,0	1,0
12	Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ	117	117	117	117
13	Масса без источника питания, г, $\pm 0,5$	5	5	5	5
14	Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)	40x10x33	40x10x33	40x10x33	40x10x33

Модель СА/ Параметры СА	n8DSP B675	n12DSP B675	n16DSP B675	n20DSP B675
15 Тип батарейки	675	675	675	675
16 Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
17 Количество каналов	8	12	16	20
18 Количество программ	1-2	1-3	1-4	1-5
19 Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	-	+	+	+
20 Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	19	21	24	27
21 Количество полос эквалайзера	8	12	16	20
22 Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Бинауральное	Бинауральное
23 Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Бинауральное
24 Направленность	Адаптивная	Адаптивная/ автоматическ ая	Адаптивная/ бинауральная узкалучевая	Адаптивная/ бинауральная узкалучевая
25 Кнопка переключения программ	+	+	+	+
26 Регулятор громкости	+	+	+	+
27 Аудиовход	+	+	+	+
28 Тиннитус-маскер	-	-	-	-
29 Светодиодная система	-	-	-	-
30 Авто телефон	-	+	+	+
31 Дневник	+	+	+	+
32 Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+

Модель СА/ Параметры СА		s8DSP B13	s12DSP B13	s16DSP B13	s20DSP B13
1	Максимальный ВУЗД90, дБ	Рожок	139	139	139
		Трубка	-	-	-
		Open Fit	-	-	-
2	Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	Рожок	135-143	135-143	135-143
		Трубка	-	-	-
		Open Fit	-	-	-
3	№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В		4	4	4
4	Максимальное акустическое усиление, дБ	Рожок	81	81	81
		Трубка	-	-	-
		Open Fit	-	-	-
5	Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	Рожок	76-86	76-86	76-86
		Трубка	-	-	-
		Open Fit	-	-	-
6	№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г		4	4	4
7	Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ		68	68	68
8	Основная частотная характеристика, Гц **		100-5000	100-5000	100-5000
9	Потребляемый ток (макс.), мА		1,6	1,6	1,6
10	Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ		19	19	19
11	Коэффициент гармоник, %	500	2,0	2,0	2,0
		800	1,0	1,0	1,0

Модель СА/ Параметры СА		s8DSP B13	s12DSP B13	s16DSP B13	s20DSP B13
	1600	1,0	1,0	1,0	1,0
12	Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ,	111	111	111	111
13	Масса без источника питания, г, $\pm 0,5$	6	6	6	6
14	Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)	40x10x33	40x10x33	40x10x33	40x10x33
15	Тип батарейки	13	13	13	13
16	Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
17	Количество каналов	8	12	16	20
18	Количество программ	1-2	1-3	1-4	1-5
19	Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	-	+	+	+
20	Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	15	17	20	22
21	Количество полос эквалайзера	8	12	16	20
22	Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Бинауральное	Бинауральное
23	Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Бинауральное
24	Направленность	Адаптивная	Адаптивная/автоматическая	Адаптивная/бинауральная узколучевая	Адаптивная/бинауральная узколучевая
25	Кнопка переключения программ	+	+	+	+
26	Регулятор громкости	+	+	+	+
27	Аудиовход	+	+	+	+
28	Тиннитус-маскер	-	-	-	-

Модель СА/ Параметры СА	s8DSP B13	s12DSP B13	s16DSP B13	s20DSP B13
29 Светодиодная система	+	+	+	+
30 Авто телефон	-	+	+	+
31 Дневник	-	-	+	+
32 Генератор сигналов для измерений In-Situ	-	-	-	-

Продолжение таблицы № 2

Модель СА/ Параметры СА		n6DP B13	n16DP B13	r17DS B312	r17DS+ B312
1 Максимальный ВУЗД90, дБ	Рожок	131	131	122	122
	Трубка	126	126	117	117
	Open Fit				
2 Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ±4 дБ от максимального	Рожок	127-135	127-135	118-126	118-126
	Трубка	122-130	122-130	113-121	113-121
	Open Fit				
3 № типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В		5	5	6	6
4 Максимальное акустическое усиление, дБ	Рожок	63	63	55	55
	Трубка	55	55	51	51
	Open Fit				
5 Пределы отклонений акустического усиления ±5 дБ от максимального	Рожок	58-68	58-68	50-60	50-60
	Трубка	50-60	50-60	46-56	46-56
	Open Fit				
6 № типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г		5	5	6	6

Модель СА/ Параметры СА		n6DP B13	n16DP B13	r17DS B312	r17DS+ B312
7 Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ±5 дБ	Рожок	52	52	49	49
	Трубка	46	46	46	46
	Open Fit				
8 Основная частотная характеристика, Гц **	Рожок	100-7100	100-7100	100-7040	100-7040
	Трубка			100-7110	100-7110
	Open Fit				
9 Потребляемый ток (макс.), мА		1,2	1,2	1,2	1,2
10 Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ		19	19	22	22
11 Коэффициент гармоник, %	500	3,0	3,0	1,8	1,8
	800	4,0	4,0	1,5	1,5
	1600	1,5	1,5	0,5	0,5
12 Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ	Рожок	107	107	73	73
	Трубка	98	98	77	77
	Open Fit				
13 Масса без источника питания, г, ±0,5		5	5	5	5
14 Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)		40x10x33	40x10x33	40x8x30	40x8x30
15 Тип батареек		13	13	312	312
16 Степень защиты по ГОСТ 14254		IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
17 Количество каналов		6	16	17	17
18 Количество программ		1-3	1-4	1-3	1-4
19 Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости		+	+	-	-

Модель СА/ Параметры СА		n6DP B13	n16DP B13	r17DS B312	r17DS+ B312
20	Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	21	23	14	14
21	Количество полос эквалайзера	6	16	17	17
22	Подавление обратной связи	Бинаурально е	Бинауральное	Адаптивная	Адаптивная
23	Шумоподавление	Бинауральн ое	Бинауральное	Адаптивная	Адаптивная
24	Направленность	Адаптивная	Адаптивная	Адаптивная	Адаптивная
25	Кнопка переключения программ	+	+	+	+
26	Регулятор громкости	-	-	-	-
27	Аудиовход	+	+	+	+
28	Тиннитус-маскер	-	-	+	+
29	Светодиодная система	-	-	+	+
30	Авто телефон	+	+	+	+
31	Дневник	+	+	+	+
32	Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+

Продолжение таблицы № 2

Модель СА/ Параметры СА		r9DM B13	r17DM B13	r17DM+ B13	r9DP B13	
1	Максимальный ВУЗД90, дБ	Рожок	128	128	128	131
		Трубка Open Fit	122	122	122	-
2	Пределы	Рожок	124-132	124-132	124-132	127-135

Модель СА/ Параметры СА		r9DM B13	r17DM B13	r17DM+ B13	r9DP B13
отклонений звукового давления (ВУЗД90) ±4 дБ от максимального	Трубка Open Fit	118-126	118-126	118-126	-
3 № типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В		7	7	7	8
4 Максимальное акустическое	Рожок	59	59	59	67
	Трубка	51	51	51	-
усиление, дБ	Open Fit				
5 Пределы отклонений акустического усиления ±5 дБ от максимального	Рожок	54-64	54-64	54-64	62-72
	Трубка Open Fit	46-56	46-56	46-56	-
6 № типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г		7	7	7	8
7 Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ±5 дБ	Рожок	52	52	52	62
	Трубка Open Fit	46	46	46	-
8 Основная частотная характеристика, Гц **	Рожок	100-6850	100-6850	100-6850	100-6170
	Трубка Open Fit	100-6770	100-6770	100-6770	-
9 Потребляемый ток (макс.), мА		1,2	1,2	1,2	1,2
10 Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ		23	23	23	20
11 Коэффициент гармоник, %	500	0,4	0,4	0,4	1,0
	800	0,4	0,4	0,4	0,4
	1600	0,5	0,5	0,5	0,5
12 Выходной УЗД при	Рожок	81	81	81	92

Модель СА/ Параметры СА		r9DM B13	r17DM B13	r17DM+ B13	r9DP B13
работе с индукционной катушкой, дБ	Трубка Open Fit	75	75	75	-
13	Масса без источника питания, г, ±0,5	5	5	5	5
14	Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)	40x10x33	40x10x33	40x10x33	40x10x33
15	Тип батареек	13	13	13	13
16	Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
17	Количество каналов	9	17	17	9
18	Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4
19	Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регуляции громкости	+	+	+	+
20	Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	14	14	14	14
21	Количество полос эквалайзера	9	17	17	9
22	Подавление обратной связи	Бинаурально е	Бинауральное	Бинауральное	Бинауральное
23	Шумоподавление	Бинауральн ое	Бинауральное	Бинауральное	Бинауральное
24	Направленность	Бинауральн ая	Бинауральная / мультиадапти вная	Бинауральная / смешанная/ автоматическ ая адаптивная	Бинауральная
25	Кнопка переключения программ	+	+	+	+
26	Регулятор громкости	+	+	+	+
27	Аудиовход	+	+	+	+

Модель СА/ Параметры СА	r9DM B13	r17DM B13	r17DM+ B13	r9DP B13
28 Тиннитус-маскер	+	+	+	+
29 Светодиодная система	+	+	+	+
30 Авто телефон	+	+	+	+
31 Дневник	+	+	+	+
32 Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+

Продолжение таблицы № 2

Модель СА/ Параметры СА		r17DP B13	r17DP+ B13	r9DSP B675	r17DSP B675
1 Максимальный ВУЗД90, дБ	Рожок	131	131	141	141
	Трубка	-	-	-	-
	Open Fit	-	-	-	-
2 Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	Рожок	127-135	127-135	137-145	137-145
	Трубка	-	-	-	-
	Open Fit	-	-	-	-
3 № типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В		8	8	9	9
4 Максимальное акустическое усиление, дБ	Рожок	72	72	83	83
	Трубка	-	-	-	-
	Open Fit	-	-	-	-
5 Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	Рожок	67-77	67-77	78-88	78-88
	Трубка	-	-	-	-
	Open Fit	-	-	-	-
6 № типовой ЧХ ВУЗД		9	9	10	10

Модель СА/ Параметры СА		r17DP B13	r17DP+ B13	r9DSP B675	r17DSP B675
в приложении Г					
7	Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	68	68	69	69
8	Основная частотная характеристика, Гц **	100-4960	100-4960	100-5860	100-5860
9	Потребляемый ток (макс.), мА	1,1	1,1	3,3	3,3
10	Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ	21	21	26	26
11	Коэффициент гармоник, %	500	0,7	1,0	4,0
		800	0,4	0,4	0,7
		1600	0,4	0,5	0,9
12	Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ	98	98	101	101
13	Масса без источника питания, г, $\pm 0,5$	5	5	7	7
14	Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)	40x10x33	40x10x33	40x10x33	40x10x33
15	Тип батарейки	13	13	675	675
16	Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
17	Количество каналов	17	17	9	17
18	Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4
19	Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	+	+	+	+
20	Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	14	14	14	14
21	Количество полос	17	17	9	17

Модель СА/ Параметры СА		r17DP B13	r17DP+ B13	r9DSP B675	r17DSP B675
эквалайзера					
22	Подавление обратной связи	Бинаурально е	Бинауральное	Бинауральное	Бинауральное
23	Шумоподавление	Бинауральн ое	Бинауральное	Бинауральное	Бинауральное
24	Направленность	Бинауральн ая	Бинауральная / мультиадапти вная	Бинауральная / смешанная/ автоматическ ая адаптивная	Бинауральная / смешанная/ автоматическ ая адаптивная
25	Кнопка переключения программ	+	+	+	+
26	Регулятор громкости	+	+	+	+
27	Аудиовход	+	+	+	+
28	Тиннитус-маскер	+	+	+	+
29	Светодиодная система	+	+	+	+
30	Авто телефон	+	+	+	+
31	Дневник	+	+	+	+
32	Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+

Продолжение таблицы № 2

Модель СА/ Параметры СА		r17DSP+ B675	o6DS B312	o8DS B312	o10DS B312
1	Максимальный ВУЗД90, дБ	Рожок	141	115	115
		Трубка	-	-	-
		Open Fit	-	-	-
2	Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ±4 дБ от	Рожок	137-145	111-119	111-119
		Трубка	-	-	-

Модель СА/ Параметры СА		r17DSP+	o6DS	o8DS	o10DS
максимального		B675	B312	B312	B312
Open Fit					
3	№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В	9	10	10	10
4	Максимальное	Рожок	83	51	51
	акустическое усиление, дБ	Трубка	-	-	-
		Open Fit	-	-	-
5	Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	Рожок	78-88	46-56	46-56
		Трубка	-	-	-
		Open Fit	-	-	-
6	№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	10	11	11	11
7	Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	69	45	45	45
8	Основная частотная характеристика, Гц **	100-5860	100-6800	100-6800	100-8000
9	Потребляемый ток (макс.), мА	3,3	1,4	1,4	1,4
10	Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ	26	17	17	17
11	Коэффициент гармоник, %	500	4,0	0,7	0,7
		800	0,7	0,9	0,9
		1600	0,9	0,1	0,1
12	Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ	101	88	88	88
13	Масса без источника питания, г, $\pm 0,5$	7	5	5	5
14	Габаритные размеры, мм,	38x8x38	32x7x29	32x7x29	32x7x29

Модель СА/ Параметры СА	r17DSP+	o6DS	o8DS	o10DS
	B675	B312	B312	B312
(ДхШхВ)				
15 Тип батарейки	675	312	312	312
16 Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
17 Количество каналов	17	6	8	10
18 Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4
19 Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	+	-	+	+
20 Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	14	5	5	5
21 Количество полос эквалайзера	17	6	8	10
22 Подавление обратной связи	Бинауральное	Бинауральное	Адаптивная	Адаптивная
23 Шумоподавление	Бинаурально е	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
24 Направленность	Бинауральная/ смешанная/ автоматическая/ адаптивная	Однополосная (2 режима)	Многополосная (3 режима)	Многополосная (3 режима)
25 Кнопка переключения программ	+	-	-	-
26 Регулятор громкости	+	+	+	+
27 Аудиовход	+	+	+	+
28 Тиннитус-маскер	+	-	-	-
29 Светодиодная система	+	+	+	+
30 Авто телефон	+	+	+	+

Модель СА/ Параметры СА	r17DSP+	o6DS	o8DS	o10DS
	B675	B312	B312	B312
31 Дневник	+	-	-	+
32 Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	-	+	+

Продолжение таблицы № 2

Модель СА/ Параметры СА		o6DM	o8DM	o10DM	o6DSP
		B13	B13	B13	B13
1 Максимальный ВУЗД90, дБ	Рожок	127	127	127	139
	Трубка Open Fit	-	-	-	-
2 Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	Рожок	123-131	123-131	123-131	135-143
	Трубка Open Fit	-	-	-	-
3 № типовой ЧХ ВУЗД90		11	11	11	12
в приложении В					
4 Максимальное акустическое усиление, дБ	Рожок	61	61	61	78
	Трубка Open Fit	-	-	-	-
5 Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	Рожок	56-66	56-66	56-66	73-83
	Трубка Open Fit	-	-	-	-
6 № типовой ЧХ ВУЗД		12	12	12	13
в приложении Г					
7 Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ		56	56	56	65

Модель СА/ Параметры СА		о6DM B13	о8DM B13	о10DM B13	о6DSP B13
8	Основная частотная характеристика, Гц **	100-6000	100-6000	100-6000	100-6200
9	Потребляемый ток (макс.), мА	1,4	1,4	1,4	2,0
10	Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ	15	15	15	21
11	Коэффициент гармоник (макс.), %	500	1,0	1,0	2,5
		800	0,5	0,5	1,0
		1600	0,3	0,3	2,5
12	Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ	99	99	99	109
13	Масса без источника питания, г, ±0,5	5	5	5	6
14	Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)	40x10x33	40x10x33	40x10x33	40x10x33
15	Тип батарейки	13	13	13	13
16	Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
17	Количество каналов	6	8	10	6
18	Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4
19	Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	-	+	+	+
20	Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	5	5	5	5
21	Количество полос эквалайзера	6	8	10	6
22	Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Бинауральное	Бинауральное
23	Шумоподавление	+	+	+	+

Модель СА/ Параметры СА		o6DM B13	o8DM B13	o10DM B13	o6DSP B13
24	Направленность	Однополосная (2 режима)	Многополосная (3 режима)	Многополосная (3 режима)	Однополосная (2 режима)
25	Кнопка переключения программ	-	-	-	+
26	Регулятор громкости	+	+	+	-
27	Аудиовход	+	+	+	+
28	Тиннитус-маскер	-	-	-	-
29	Светодиодная система	+	+	+	+
30	Авто телефон	+	+	+	+
31	Дневник	-	-	+	-
32	Генератор сигналов для измерений In-Situ	-	+	+	+

Продолжение таблицы № 2

Модель СА/ Параметры СА		o8DSP B13	o10DSP B13	n2412DSP B675	n2416DSP B675
1	Максимальный ВУЗД90, дБ	Рожок	139	139	140
		Трубка	-	-	-
		Open Fit	-	-	-
2	Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	Рожок	135-143	135-143	136-144
		Трубка	-	-	-
		Open Fit	-	-	-
3	№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В		12	12	13
4	Максимальное	Рожок	78	78	82

Модель СА/ Параметры СА		o8DSP B13	o10DSP B13	n2412DSP B675	n2416DSP B675
акустическое усиление, дБ	Трубка Open Fit	-	-	-	-
5 Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	Рожок	73-83	73-83	77-87	77-87
	Трубка	-	-	-	-
	Open Fit	-	-	-	-
6 № типовой ЧХ ВУЗД		13	13	14	14
в приложении Г					
7 Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ		65	65	72	72
8 Основная частотная характеристика, Гц **		100-6200	100-6200	100-4800	100-4800
9 Потребляемый ток (макс.), мА		2,0	2,0	2,1	2,1
10 Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ		21	21	18	18
11 Коэффициент гармоник (макс.), %	500	2,5	2,5	2,0	2,0
	800	1,0	1,0	1,0	1,0
		2,5	2,5	2,0	2,0
	1600				
12 Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ		109	109	108	108
13 Масса без источника питания, г, $\pm 0,5$		6	6	6	6
14 Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)		40x10x33	40x10x33	40x10x33	40x10x33
15 Тип батарейки		13	13	675	675
16 Степень защиты по ГОСТ 14254		IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
17 Количество каналов		8	10	24/12	24/16

Модель СА/ Параметры СА		o8DSP B13	o10DSP B13	n2412DSP B675	n2416DSP B675
18	Количество программ	1-4	1-4	1-6	1-6
19	Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	+	+	-	-
20	Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	5	5	17	17
21	Количество полос эквалайзера	8	10	12	16
22	Подавление обратной связи	Бинауральное	Бинауральное	Бинауральное	Бинауральное
23	Шумоподавление	+	+	+	+
24	Направленность	Многополосная (3 режима)	Многополосная (3 режима)	Адаптивная/многоканальная	Адаптивная/многоканальная
25	Кнопка переключения программ	+	+	+	+
26	Регулятор громкости	-	-	+	+
27	Аудиовход	+	+	+	+
28	Тиннитус-маскер	+	+	+	+
29	Светодиодная система	+	+	+	+
30	Авто телефон	+	+	+	+
31	Дневник	+	+	+	+
32	Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+

Продолжение таблицы № 2

Модель СА/ Параметры СА		m2412DM+ B13	m3216DM+ B13	m4820DM+ B13	m2412DP B13
1	Максимальный Рожок	130	130	130	135

Модель СА/ Параметры СА		m2412DM+	m3216DM+	m4820DM+	m2412DP
		B13	B13	B13	B13
ВУЗД90, дБ	Трубка Open Fit	124	124	124	127
2 Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	Рожок	126-134	126-134	126-134	131-139
	Трубка Open Fit	120-128	120-128	120-128	123-131
3 № типовой ЧХ ВУЗД90					
в приложении В		14	14	14	15
4 Максимальное акустическое усиление, дБ	Рожок	65	65	65	75
	Трубка Open Fit	60	60	60	65
5 Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	Рожок	60-70	60-70	60-70	70-80
	Трубка Open Fit	55-65	55-65	55-65	60-70
6 № типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г		15	15	15	16
7 Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	Рожок	63	63	63	66
	Трубка Open Fit	57	57	57	49
8 Основная частотная характеристика, Гц **	Рожок	100-7500	100-7500	100-7500	100 - 6000
	Трубка Open Fit	100-7600	100-7600	100-7600	100 - 5500
9 Потребляемый ток (макс.), мА		1,1	1,1	1,1	1,3
10 Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ	Рожок	20	20	20	19
	Трубка Open Fit	23	23	23	27

Модель СА/ Параметры СА		m2412DM+	m3216DM+	m4820DM+	m2412DP
		B13	B13	B13	B13
11 Коэффициент гармоник (макс.), %	500	2,0	2,0	2,0	3,0
	800	2,0	2,0	2,0	2,0
	1600	1,0	1,0	1,0	1,0
12 Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ	Рожок	87	87	87	98
	Трубка				
	Open Fit	77	77	77	81
13 Масса без источника питания, г, ±0,5		4	4	4	4
14 Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)		40x10x33	40x10x33	40x10x33	40x10x33
15 Тип батарейки		13	13	13	13
16 Степень защиты по ГОСТ 14254		IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
17 Количество каналов		24/12	32/16	48/20	24/12
18 Количество программ		1-6	1-6	1-6	1-6
19 Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости		+	+	+	+
20 Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее		30	30	30	17
21 Количество полос эквалайзера		12	16	20	12
22 Подавление обратной связи		Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
23 Шумоподавление		+	+	+	+
24 Направленность		Одноканальная	Многоканальная	Многоканальная	Адаптивная/одноканальная
25 Кнопка переключения		+	+	+	+

Модель СА/ Параметры СА		m2412DM+	m3216DM+	m4820DM+	m2412DP
		B13	B13	B13	B13
программ					
26	Регулятор громкости	+	+	+	+
27	Аудиовход	+	+	+	+
28	Тиннитус-маскер	+	+	+	+
29	Светодиодная система	-	-	-	-
30	Авто телефон	*	+	+	*
31	Дневник	+	+	+	+
32	Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+

Модель СА/ Параметры СА		m3216DP	m4820DP	a2412DM	a3216DM
		B13	B13	B13	B13
1	Максимальный ВУЗД90, дБ	Рожок	135	135	129
		Трубка Open Fit	127	127	122
2	Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	Рожок	131-139	131-139	125-133
		Трубка Open Fit	123-131	123-131	118-126
3	№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В		15	15	16
4	Максимальное акустическое усиление, дБ	Рожок	75	75	65
		Трубка Open Fit	65	65	49
5	Пределы	Рожок	70-80	70-80	60-70

Модель СА/ Параметры СА		m3216DP B13	m4820DP B13	a2412DM B13	a3216DM B13
отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	Трубка Open Fit	60-70	60-70	44-54	44-54
6 № типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г		16	16	17	17
7 Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	Рожок	66	66	59	59
	Трубка	49	49	48	48
	Open Fit				
8 Основная частотная характеристика, Гц **		100 - 6000	100 - 6000	110 - 6500	110 - 6500
		100 - 5500	100 - 5500	110 - 8000	110 - 8000
9 Потребляемый ток (макс.), мА		1,3	1,3	1,1	1,1
10 Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ	Рожок	19	19	18	18
	Трубка	27	27	17	17
	Open Fit				
11 Коэффициент гармоник (макс.), %	500	3,0	3,0	2,0	2,0
	800	2,0	2,0	1,0	1,0
	1600	1,0	1,0	1,0	1,0
12 Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ	Рожок	98	98	-	-
	Трубка	81	81	-	-
	Open Fit				
13 Масса без источника питания, г, $\pm 0,5$		4	4	6	6
14 Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)		40x10x33	40x10x33	40x10x33	40x10x33
15 Тип батареек		13	13	13	13
16 Степень защиты по ГОСТ 14254		IP 67	IP 67	IP 68	IP 68

Модель СА/ Параметры СА	m3216DP B13	m4820DP B13	a2412DM B13	a3216DM B13
17 Количество каналов	32/16	48/20	24/12	32/16
18 Количество программ	1-6	1-6	1-6	1-6
19 Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	+	+	-	-
20 Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	17	17	17	17
21 Количество полос эквалайзера	16	20	12	16
22 Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
23 Шумоподавление	+	+	Адаптивное	Адаптивное
24 Направленность	Адаптивная/ многоканальн ая	Адаптивная/ многоканальн ая	Адаптивная/ многоканальн ая	Адаптивная/ многоканальн ая
25 Кнопка переключения программ	+	+	+	+
26 Регулятор громкости	+	+	-	-
27 Аудиовход	+	+	-	-
28 Тиннитус-маскер	+	+	+	+
29 Светодиодная система	-	-	-	-
30 Авто телефон	*	+	+	+
31 Дневник	+	+	+	+
32 Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+

Продолжение таблицы № 2

Модель СА/ Параметры СА		a4820DM	m2412DM	m3216DM	m4820DM	
		B13	B13	B13	B13	
1	Максимальный ВУЗД90, дБ	Рожок	129	130	130	130
		Трубка Open Fit	122	126	126	126
2	Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ±4 дБ от максимального	Рожок	125-133	126-134	126-134	126-134
		Трубка Open Fit	118-126	122-130	122-130	122-130
3 № типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В		16	17	17	17	
4	Максимальное акустическое усиление, дБ	Рожок	65	60	60	60
		Трубка Open Fit	49	53	53	53
5	Пределы отклонений акустического усиления ±5 дБ от максимального	Рожок	60-70	55-65	55-65	55-65
		Трубка Open Fit	44-54	48-58	48-58	48-58
6 № типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г		17	18	18	18	
7	Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ±5 дБ	Рожок	59	53	53	53
		Трубка Open Fit	48	47	47	47
8	Основная частотная характеристика, Гц **	Рожок	110 - 6500	100-7700	100-7700	100-7700
		Трубка Open Fit	110 - 8000	100-8100	100-8100	100-8100
9 Потребляемый ток (макс.), мА		1,1	1,1	1,1	1,1	
10	Приведенный ко входу уровень собственных	Рожок	18	16	16	16
		Трубка	17	18	18	18

Модель СА/ Параметры СА		a4820DM	m2412DM	m3216DM	m4820DM
		B13	B13	B13	B13
шумов (макс.), дБ	Open Fit				
11 Коэффициент гармоник (макс.), %	500	2,0	2,0	2,0	2,0
	800	1,0	2,0	2,0	2,0
	1600	1,0	1,0	1,0	1,0
12 Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ	Рожок	-	80	80	80
	Трубка	-	69	69	69
	Open Fit				
13 Масса без источника питания, г, $\pm 0,5$		6	5	5	5
14 Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)		40x10x33	40x10x33	40x10x33	40x10x33
15 Тип батарейки		13	13	13	13
16 Степень защиты по ГОСТ 14254		IP 68	IP 67	IP 67	IP 67
17 Количество каналов		48/20	24/12	32/16	48/20
18 Количество программ		1-6	1-6	1-6	1-6
19 Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости		-	+	+	+
20 Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее		17	17	17	17
21 Количество полос эквалайзера		20	12	16	20
22 Подавление обратной связи		Адаптивное	Бинауральное	Бинауральное	Бинауральное
23 Шумоподавление		Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Бинауральное
24 Направленность		Адаптивная/ многоканальн ая	Адаптивная/ многоканальн ая	Адаптивная/ многоканальн ая	Адаптивная/ многоканальн ая

Модель СА/ Параметры СА		a4820DM B13	m2412DM B13	m3216DM B13	m4820DM B13
25	Кнопка переключения программ	+	-	-	-
26	Регулятор громкости	-	+	+	+
27	Аудиовход	-	+	+	+
28	Тиннитус-маскер	+	+	+	+
29	Светодиодная система	-	-	-	-
30	Авто-телефон	+	*	+	+
31	Дневник	+	+	+	+
32	Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	-	-	-

Модель СА/ Параметры СА		h8DP B13	h12DP B13	h16DP B13	m10DM B312	
1	Максимальный ВУЗД90, дБ	Рожок	131	131	131	130
		Трубка Open Fit	120	120	120	120
2	Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ±4 дБ от максимального	Рожок	127-135	127-135	127-135	126-134
		Трубка Open Fit	116-124	116-124	116-124	116-120
3	№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В		18	18	18	19
4	Максимальное акустическое усиление, дБ	Рожок	70	70	70	60
		Трубка Open Fit	64	64	64	60

Модель СА/ Параметры СА		h8DP	h12DP	h16DP	m10DM B312	
		B13	B13	B13		
5	Пределы отклонений акустического усиления ±5 дБ от максимального	Рожок	65-75	65-75	65-75	
		Трубка	59-69	59-69	59-69	55-65
		Open Fit				
6 № типовой ЧХ ВУЗД						
в приложении Г		19	19	19	20	
7	Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ±5 дБ	Рожок	63	63	63	51
		Трубка	52	52	52	49
		Open Fit				
8 Основная частотная характеристика, Гц **		100-7400	100-7400	100-7400	100-8000	
9 Потребляемый ток (макс.), мА		1,4	1,4	1,4	1,3	
10 Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ		26	26	26	25	
11	Коэффициент гармоник (макс.), %	500	5,0	5,0	5,0	3,0
		800	2,0	2,0	2,0	5,0
		1600	1,0	1,0	1,0	3,0
12	Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ	Рожок	-	-	-	100
		Трубка	-	-	-	90
		Open Fit				
13 Масса без источника питания, г, ±0,5		6	6	6	5	
14 Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)		40x10x33	40x10x33	40x10x33	32x7x29	
15 Тип батарейки		13	13	13	312	
16 Степень защиты по ГОСТ 14254		IP 54	IP 54	IP 54	IP 67	

Модель СА/ Параметры СА		h8DP B13	h12DP B13	h16DP B13	m10DM B312
17	Количество каналов	8	12	16	10
18	Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4
19	Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	+	+	+	+
20	Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	15	15	15	19
21	Количество полос эквалайзера	8	12	16	10
22	Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
23	Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
24	Направленность	Адаптивная	Адаптивная	Адаптивная	Адаптивная
25	Кнопка переключения программ	-	-	-	-
26	Регулятор громкости	+	+	+	+
27	Аудиовход	-	-	-	+
28	Тиннитус-маскер	+	+	+	+
29	Светодиодная система	-	-	-	-
30	Авто телефон	+	+	+	-
31	Дневник	+	+	+	+
32	Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	-

Модель СА/ Параметры СА		m12DM B312	m16DM B312	m20DM B312	m24DM B312
1	Максимальный Рожок	130	130	130	130

Модель СА/ Параметры СА		m12DM B312	m16DM B312	m20DM B312	m24DM B312
ВУЗД90, дБ	Трубка Open Fit	120	120	120	120
2 Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90)	Рожок	126-134	126-134	126-134	126-134
	Трубка Open Fit	116-120	116-120	116-120	116-120
±4 дБ от максимального					
3 № типовой ЧХ ВУЗД90					
в приложении В		19	19	19	19
4 Максимальное акустическое усиление, дБ	Рожок	60	60	60	60
	Трубка Open Fit	60	60	60	60
5 Пределы отклонений акустического усиления ±5 дБ от максимального	Рожок	55-65	55-65	55-65	55-65
	Трубка Open Fit	55-65	55-65	55-65	55-65
6 № типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г		20	20	20	20
7 Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ±5 дБ	Рожок	51	51	51	51
	Трубка Open Fit	49	49	49	49
8 Основная частотная характеристика, Гц **	Рожок	100-8100	100-8100	100-8100	100-8100
	Трубка Open Fit	100-6800	100-6800	100-6800	100-6800
9 Потребляемый ток (макс.), мА		1,3	1,3	1,3	1,3
10 Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ		25	25	25	25
11 Коэффициент	500	3,0	3,0	3,0	3,0

Модель СА/ Параметры СА		m12DM B312	m16DM B312	m20DM B312	m24DM B312
гармоник (макс.), %	800	5,0	5,0	5,0	5,0
	1600	3,0	3,0	3,0	3,0
12 Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ	Рожок	100	100	100	100
	Трубка	90	90	90	90
	Open Fit				
13 Масса без источника питания, г, $\pm 0,5$		5	5	5	5
14 Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)		32x7x29	32x7x29	32x7x29	32x7x29
15 Тип батареек		312	312	312	312
16 Степень защиты по ГОСТ 14254		IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
17 Количество каналов		12	16	20	24
18 Количество программ		1-4	1-4	1-4	1-4
19 Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости		+	+	+	+
20 Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее		19	19	19	19
21 Количество полос эквалайзера		12	16	20	24
22 Подавление обратной связи		Адаптивное	Бинауральная	Бинауральная	Бинауральная
23 Шумоподавление		Адаптивное	Бинауральная	Бинауральная	Бинауральная
24 Направленность		Адаптивная	Бинауральная	Бинауральная	Бинауральная
25 Кнопка переключения		-	-	-	-

Модель СА/ Параметры СА		m12DM B312	m16DM B312	m20DM B312	m24DM B312
программ					
26	Регулятор громкости	+	+	+	+
27	Аудиовход	+	+	+	+
28	Тиннитус-маскер	+	+	+	+
29	Светодиодная система	-	-	-	-
30	Авто телефон	-	+	+	+
31	Дневник	+	+	+	+
32	Генератор сигналов для измерений In-Situ	-	+	+	+

Модель СА/ Параметры СА		m10DP B13	m12DP B13	m16DP B13	m20DP B13	m24DP B13
1	Максимальный ВУЗД90, дБ	Рожок	130	130	130	130
		Трубка				
		Open Fit	122	122	122	122
2	Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90), ±4 дБ от максимального	Рожок	126-134	126-134	126-134	126-134
		Трубка				
		Open Fit	118-126	118-126	118-126	118-126
3	№ типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В		20	20	20	20
4	Максимальное акустическое усиление, дБ	Рожок	70	70	70	70
		Трубка				
		Open Fit	68	68	68	68

Модель СА/ Параметры СА		m10DP	m12DP	m16DP	m20DP	m24DP
		B13	B13	B13	B13	B13
5	Пределы отклонений акустического усиления ±5 дБ от максимального	Рожок	65-75	65-75	65-75	65-75
		Трубка Open Fit	63-73	63-73	63-73	63-73
6 № типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г		21	21	21	21	21
7	Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц,±5 дБ	Рожок	62	62	62	62
		Трубка Open Fit	57	57	57	57
8	Основная частотная характеристика, Гц **	Рожок	100-7600	100-7600	100-7600	100-7600
		Трубка Open Fit	100-4600	100-4600	100-4600	100-4600
9 Потребляемый ток (макс.), мА		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
10	Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ	Рожок	24	24	24	24
		Трубка Open Fi	29	29	29	29
11	Коэффициент гармоник (макс.), %	500	3,0	3,0	3,0	3,0
		800	5,0	5,0	5,0	5,0
		1600	3,0	3,0	3,0	3,0
12	Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ	Рожок	101	101	101	101
		Трубка Open Fi	96	96	96	96
13 Масса без источника питания, г, ±0,5,		6	6	6	6	6

Модель СА/ Параметры СА	m10DP B13	m12DP B13	m16DP B13	m20DP B13	m24DP B13
14 Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)	40x10x33	40x10x33	40x10x33	40x10x33	40x10x33
15 Тип батарейки	13	13	13	13	13
16 Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
17 Количество каналов	10	12	16	20	24
18 Количество программ	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
19 Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	-	-	+	+	+
20 Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	19	19	19	19	19
21 Количество полос эквалайзера	10	12	16	20	24
22 Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Бинауральн ая	Бинауральна я	Бинауральн ая
23 Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Бинауральн ая	Бинауральна я	Бинауральн ая
24 Направленность	Адаптивная	Адаптивная	Бинауральн ая	Бинауральна я	Бинауральн ая
25 Кнопка переключения программ	-	-	-	-	-
26 Регулятор громкости	+	+	+	+	+
27 Аудиовход	+	+	+	+	+
28 Тиннитус-маскер	+	+	+	+	+
29 Светодиодная система	-	-	-	-	-

Модель СА/ Параметры СА	m10DP B13	m12DP B13	m16DP B13	m20DP B13	m24DP B13
30 Авто телефон	+	+	+	+	+
31 Дневник	+	+	+	+	+
32 Генератор сигналов для измерений In-Situ	-	-	+	+	+

Окончание таблицы 2

Модель СА/ Параметры СА		a100DS B675	a100DM B675	a100DP B675	a100DSP-B675
1 Максимальный ВУЗД90, дБ	Рожок	120	128	135	141
	Трубка Open Fit	113	122	126	132
2 Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90), ±4 дБ	Рожок	116-124	124-132	131-139	137-145
	Трубка Open Fit	109-117	118-126	122-130	128-136
от максимального					
3 № типовой ЧХ ВУЗД90 в приложении В		21	22	23	24
4 Максимальное акустическое усиление, дБ	Рожок	50	58	65	82
	Трубка Open Fit	44	51	57	73
5 Пределы отклонений акустического усиления ±5 дБ	Рожок	45-55	53-63	60-70	77-87
	Трубка Open Fit	39-49	46-56	52-62	68-78
от максимального					

Модель СА/ Параметры СА		a100DS B675	a100DM B675	a100DP B675	a100DSP B675
6	№ типовой ЧХ ВУЗД в приложении Г	22	23	24	25
7	Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ±5 дБ	Рожок	46	50	60
		Трубка			
		Open Fit	42	45	54
8	Основная частотная характеристика, Гц **	100-7400	100-7400	100-7300	100-7100
9	Потребляемый ток (макс.), мА	1,0	1,5	1,8	3,0
10	Приведенный ко входу уровень собственных шумов (макс.), дБ	Рожок	25	25	24
		Трубка			
		Open Fit	22	22	20
11	Коэффициент гармоник (макс.), %	500			
		800	4	4	5
		1600			
12	Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ	Рожок	85	90	90
		Трубка			
		Open Fit	75	80	80
13	Масса без источника питания, г, ±0,5,	5	5	5	5
14	Габаритные размеры, мм, (ДхШхВ)	40x10x33	40x10x33	40x10x33	40x10x33
15	Тип батарейки	675/13*	675/13*	675/13*	675/13*
16	Степень защиты по ГОСТ 14254	32 (67)*	32 (67)*	32 (67)*	32 (67)*
17	Количество каналов	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*	8 (0-100)*
18	Количество программ	1-8*	1-8*	1-8*	1-8*

Модель СА/ Параметры СА	a100DS B675	a100DM B675	a100DP B675	a100DSP B675
19 Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление	Внешнее управление
20 Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	16	16	16	16
21 Количество полос эквалайзера	16-33*	16-33*	16-33*	16-33*
22 Подавление обратной связи	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
23 Шумоподавление	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное	Адаптивное
24 Направленность	+	+	+	+
25 Кнопка переключения программ	+	+	+	+
26 Регулятор громкости	Аналоговый/ Цифровой*	Аналоговый/ Цифровой*	Аналоговый/ Цифровой*	Аналоговый/ Цифровой*
27 Аудиовход	+/-FM- Адаптер*	+/- FM-Адаптер*	+/- FM-Адаптер*	+/- FM- Адаптер*
28 Тиннитус-маскер	+	+	+	+
29 Светодиодная система	*	*	*	*
30 Авто телефон	*	*	*	*
31 Дневник	+	+	+	+
32 Генератор сигналов для измерений In-Situ	+	+	+	+

Примечание:

* - опция-конфигурация по индивидуальному заказу.

** - по ГОСТ Р 51024 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» допуски по значениям нижней границы частотного диапазона составляют ± 100 Гц (± 6 дБ), по значению верхней границы ± 500 Гц (± 6 дБ);
(макс.) – максимальное значение;

Для значений с не указанными допустимыми отклонениями, разброс параметров $\pm 20\%$.

Уход за слуховым аппаратом

Слуховые аппараты требуют аккуратного обращения

Правильное обращение способствует надёжной работе слухового аппарата.

Ежедневный уход и регулярное сервисное обслуживание слухового аппарата значительно продлевают срок его службы и обеспечивают его эффективную работу.

Следите за чистотой слухового аппарата. Регулярно удаляйте грязь кисточкой, а затем протирайте его мягкой тканью. Никогда не мойте слуховой аппарат водой, чистящими растворами или другими жидкостями.

Очищайте уши от серы, потому что она может вызвать ухудшение работы или даже поломку слухового аппарата (Рис. 11).

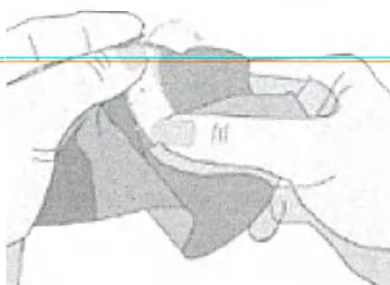


Рис. 11. Очистка слухового аппарата.

Если Ваш слуховой аппарат подвергся чрезмерному воздействию влаги, просушите его с помощью специального набора для очистки слухового аппарата (например, Аурика Pure Line (не является медицинским изделием), который можно приобрести у ООО «Аурика»), предварительно удалив батарейку.

Во избежание повреждений храните слуховой аппарат в предназначенном для этого футляре.

Уход за ушным вкладышем

Ушной вкладыш – важная деталь Вашего аппарата, поэтому необходимо следить за его чистотой.

Чистка ушных вкладышей

Осторожно отделите звуковод (звукопроводящую трубку Open Fit) вкладыша от рожка слухового аппарата. Аккуратно промойте вкладыш в тёплой мыльной воде или поместите его в любой специальный раствор, предназначенный специально для ухода за слуховыми аппаратами, на 15-30 минут, в соответствии с инструкцией по применению раствора. (Рис. 12). Например, допустимо использовать Таблетки очищающие Cedis eC5.3 производства Cedis GmbH, Германия (не являются медицинским изделием).



Рис. 12. Очистка ушного вкладыша.

После обработки вкладыш должен полностью высохнуть. Если в ушном вкладыше или трубке осталась влага, воспользуйтесь любым продувающим устройством, предназначенным для ухода за слуховыми аппаратами (Рис. 13), например, Груша для продувки индивидуальных ушных вкладышей Ergorpower ER-114 производства Ergorpower, КНР (не является медицинским изделием). Если трубка ушного вкладыша потеряла эластичность, стала жёлтой или потрескалась, её следует заменить.

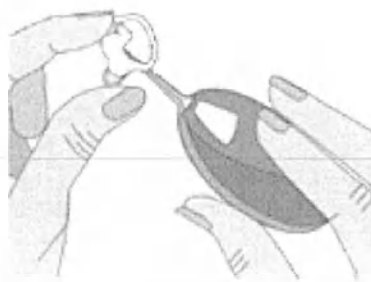


Рис. 13. Сушка ушного вкладыша.

Для этого обратитесь к специалисту по слуховым аппаратам.

Никогда не используйте спиртовые растворы для чистки ушного вкладыша.

Никогда не обрабатывайте слуховой аппарат средством для чистки вкладышей.

Дезинфекция

Наружные поверхности СА, его принадлежностей следует обрабатывать по МУ-287-113 протираaniem марлевой салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

Звукопроводящие трубочки OpenFit, ушные вкладыши, рожок, детский рожок, а также принадлежности, не имеющие электронные компоненты, следует обрабатывать по МУ-287-113 погружением и полосканием в 3% растворе перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

Маркировка

Расшифровка применяемых символов маркировки:

Изображение символа	Расшифровка
	Производитель
	Рабочая часть типа В
	Обратитесь к инструкции по применению
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Знак соответствия декларированию (при получении)

Указания по утилизации

Не допускается утилизация СА с домашним мусором. Следует утилизировать использованные аппараты согласно правилам, установленным действующим законодательством государства, где используется СА, по сбору ТБО (твердых бытовых отходов) установленными для изделий, содержащих следующий морфологический состав ТБО (твердых бытовых отходов): металл, пластмасса или возвращать их специалисту по слухопротезированию.

Все элементы питания (батарейки и аккумуляторы) нуждаются в специальной утилизации. В целях предотвращения загрязнения окружающей среды их не рекомендуется выбрасывать с обычным мусором. Использованные батарейки необходимо сдавать в специализированные пункты приема, имеющие право утилизировать следующий морфологический состав ТБО: металл.

Упаковку медицинского изделия и его компонентов (кроме футляра) следует утилизировать как бытовые отходы в соответствии с правилами утилизации следующего морфологического состава ТБО: бумага.

Звукопроводящие трубки OpenFit, ушные вкладыши, рожок, детский рожок, футляр следует утилизировать в специализированные пункты сбора ТБО, осуществляющие утилизацию следующего морфологического состава ТБО: пластмасса

Аудио-шнур следует утилизировать в специализированные пункты сбора ТБО, осуществляющие утилизацию следующего морфологического состава ТБО: резина, пластмасса.

В случае, если законодательством государства, где используется СА, не предусмотрен специализированный сбор ТБО, утилизация должна осуществляться в соответствии с законодательством этого государства.

Привыкание к слуховому аппарату

Покупая слуховой аппарат, будьте готовы к тому, что понадобится некоторое время для того, чтобы привыкнуть к новым звукам и ощущениям. Сколько времени займет этот процесс, зависит от индивидуальных особенностей организма, от степени потери слуха, опыта пользования слухового аппарата и т.п. Если Вы начали испытывать дискомфорт при использовании слухового аппарата, необходимо уменьшить громкость слухового аппарата или отключить его, чтобы отдохнуть.

При просмотре телевизора установите громкость телевизора на нормальный уровень. Если Вы при этом плохо различаете звуки, увеличьте громкость Вашего слухового аппарата с помощью регулятора громкости. При этом, однако, следует помнить, что слишком сильное повышение громкости не улучшает восприятие речи, но может привести к быстрой утомляемости и спровоцировать ухудшение слуха. В шумной обстановке довольно трудно различить отдельные слова, поэтому не стесняйтесь переспрашивать.

Сервис

Сервис необходим для предотвращения дорогих и сложных ремонтов и для **обеспечения бесперебойной работы аппарата**. Бесплатный сервис производится во время гарантийного срока и распространяется только на те детали аппарата, на которые установлена гарантия (см. в разделе «Гарантия»).

Для выполнения гарантийного обслуживания Вам необходимо обратиться к специалисту, у которого Вы приобрели аппарат.

Об условиях обслуживания после гарантийного срока Вам сообщит специалист, у которого Вы приобрели аппарат.

Претензии по качеству товара и аксессуаров, бывших в употреблении, принимаются в организации, осуществившей продажу устройства, в течение Гарантийного срока в виде заявления с указанием конкретных дефектов, при наличии кассового или товарного чека, сохранения упаковки

Возможные проблемы и их разрешение

Аппарат не работает:

Убедитесь в том, что батарея правильно вложена в батарейный отсек (см. в разделе «Замена батареи»).

Убедитесь в том, что крышка батарейного отсека закрыта до конца.

Убедитесь в том, что батарея не разряжена.

Убедитесь в том, что звуковод во вкладыше не загрязнён.

Проверьте, чтобы в рожке не было конденсата или загрязнений, при необходимости очистите его у специалиста.

При конденсате или влажности в аппарате поместите его в специальный контейнер с влаговытягивающей таблеткой.

Звук слишком тихий, пульсирует или прерывается:

Проверьте регулятор громкости.

Убедитесь в том, что батарея не разряжена.

Убедитесь в том, что звуковод во вкладыше не загрязнён. Проверьте, чтобы в рожке не было конденсата или загрязнений; при необходимости очистите его у специалиста.

При конденсате или влажности в аппарате поместите его в контейнер с влаговытягивающей таблеткой.

Если все попытки устранения неисправности оказались безуспешными, обратитесь к специалисту по слуховым аппаратам.

Аппарат посвистывает, свистит:

Вкладыш неплотно сидит в слуховом проходе. Извлеките его и заново поместите в слуховой проход.

Убедитесь, что в гибком звуковом проводе нет повреждений. Если его необходимо заменить, обратитесь для этого к специалисту.

Произошла деформация вкладыша, и его необходимо заменить новым.

Сера скопилась в слуховом проходе. Обратитесь к врачу, чтобы он освободил слуховой проход от серы.

Произошли изменения формы ушного канала. Нужно обратиться к специалисту за подбором (изготовлением) нового вкладыша.

Условия эксплуатации

СА должны эксплуатироваться при температурах от -10 до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 85 % при 25°C и более низких температурах без конденсации влаги.

Транспортирование и хранение

СА транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования соответствуют условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

СА в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

Техническое обслуживание и ремонт

Техническое обслуживание СА состоит в его настройке и, при необходимости, перенастройке под индивидуальные показания пациента. Такое техническое обслуживание осуществляет врач-сурдолог в соответствии с Инструкцией по настройке.

Ремонт медицинского изделия осуществляется производителем по направлению специалиста, у которого был приобретен СА.

Гарантия

Предприятие-изготовитель (ООО «Аурика») гарантирует соответствие СА установленным требованиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантия распространяется на дефекты, обусловленные недостатками материала или производства аппарата.

Гарантия не распространяется на аксессуары, такие как элементы питания, звуководы, ушные вкладыши и т. п.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением правил эксплуатации аппарата или использованием его не по назначению.

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с момента отгрузки изготовителем.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи потребителю, но в пределах гарантийного срока хранения.

Продолжительность установленных гарантийных сроков не распространяется на источники питания.

По всем вопросам пользователь может обращаться к производителю:

ООО «Аурика»

Россия, 301138, Тульская обл., Ленинский р-н, пос. Иншинский, тер. Технопарк Иншинский, зд. 1, ком. 304-306

тел.. +7 (4872) 71-82-82

Внимание! При возникновении нежелательных событий / неблагоприятных событий / инцидентов, связанных с медицинским изделием, следует сообщить о них производителю.

Перечень стандартов, которым соответствуют СА

Обозначение	Наименование
ГОСТ 177-88	Водорода перекись. Технические условия.
ГОСТ Р 52901-2007	Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия.
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды.
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.
МЭК 60118-11	Аппараты слуховые. Часть 11. Условные обозначения и маркировка

	слуховых аппаратов и комплектующих устройств.
ГОСТ Р 51024-2012	Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013	Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке.
МЭК 60318-4:2010	Имитаторы внутреннего уха для измерения характеристик телефонов, соединенных с ухом посредством ушных вкладышей.
МЭК 60318-5:2010	Камера эталонная для испытания слуховых аппаратов, в которых используются головные телефоны с ушными вставками.
ГОСТ Р 51407-99	Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний.
МУ-287-113-98	Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.
РД 50-707-91	Методические указания. Изделия медицинской техники. Требования к надежности, правила и методы контроля показателей надежности.
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010	Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.
ГОСТ 14254-2015	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
ГОСТ ISO 10993	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.
ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003	Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей.
ГОСТ Р МЭК 62304-2013	Изделия медицинские. Программное обеспечение. Процессы жизненного цикла.
ГОСТ 25644-96	Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования
ГОСТ 33781-2016	Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия
ТУ 2214-002-98914453-2006	АБС-Пластик, окрашенный в массу, АБС-ОМ-2020-30- (код цвета).
ТУ 6-02-34-89	Пластикат поливинилхлоридный медицинский.
ТУ 9444-010-81271212-	Ушные вкладыши «АУРИКА»

2015	
ТУ 6-05-1533-85	Пластикат гранулированный медицинский
ТУ 2243-001-79683189-2008	Суперконцентраты гранулированные пигментов для окрашивания полиолефинов, стирольных полимеров, полиэфиров и ПВХ
ТУ 38.103213-2006	Каучук синтетический бутадиен-нитрильный СКН-26ПВХ-30
ТУ 6571-003-57387390-2011	
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93	Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению.
ГОСТ Р ИСО 9127-94	Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных пакетов.
ГОСТ Р 51188-98	Защита информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000	Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование
ГОСТ 28195-89	Оценка качества программных средств. Общие положения.

Терминологический словарь

Параметр СА	Описание параметра
Максимальный ВУЗД90, дБ	Максимальный выходной уровень звукового давления при входном уровне звукового давления, равном 90 дБ
Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального	Пределы отклонений звукового давления (ВУЗД90) ± 4 дБ от максимального
Максимальное акустическое усиление, дБ	Наивысшая точка полного акустического усиления
Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального	Пределы отклонений акустического усиления ± 5 дБ от максимального
Полное акустическое усиление на частоте 1,6 кГц, ± 5 дБ	Акустическое усиление в линейном динамическом диапазоне работы СА, получаемое при измерении СА, когда

	регулятор усиления установлен в положение максимума, а другие регуляторы установлены в заданные положения.
Основная частотная характеристика, Гц, не уже**	Частотная характеристика, получаемая при входном УЗД, равном 60 (или 50) дБ, и контрольном положении регулятора усиления
Глубина регулировки акустического усиления, дБ, не менее	Величина регулировки акустического усиления
Потребляемый ток, мА (макс.), не более	Величина тока, измеряемого при входном УЗД, равном 60 дБ, на контрольной частоте при установке контрольного или номинального контрольного усиления СА
Приведенный ко входу уровень собственных шумов, дБА, не более	Уровень шума который возникает внутри СА
Коэффициент гармоник, %, не более	Величина для количественной оценки нелинейных искажений, равная отношению среднеквадратичной суммы спектральных компонентов выходного сигнала, отсутствующих в спектре входного сигнала, к среднеквадратичной сумме спектральных компонентов входного сигнала
Выходной УЗД при работе с индукционной катушкой, дБ, не менее	Выходной уровень звукового давления при работе с индукционной катушкой
Масса, г, не более	Величина, измеряющая количество вещества в теле
Габаритные размеры, мм, $\pm 5\%$ (ДхШхВ)	Предельные значения длины, ширины и высоты СА
Тип батарейки	Типоразмер гальванических элементов питания
Степень защиты по ГОСТ 14254	Уровень защиты от попадания влаги, пота и пыли

Количество каналов	Разбивка диапазона воспроизводимых частот на отрезки с возможностью независимого изменения режимов компрессии отдельно в каждом канале.
Количество программ	Параметры, позволяющие избирательно корректировать амплитуду сигнала в зависимости от частотных характеристик.
Бинауральная синхронизация переключения программ и/или регулировки громкости	Возможность одновременного переключения программ и уровня громкости для парных СА
Количество доступных режимов для выбора на одну программу, не менее	Количество режимов окружающей обстановки, доступные для выбора во врачебном ПО по выбору пациента.
Количество полос эквалайзера	Почастотная разбивка диапазона воспроизводимых частот с возможностью изменения усиления по каждой частоте отдельно.
Подавление обратной связи	Система анализа выходного сигнала и удаления посторонних звуков вследствие возникновения обратной связи (свиста)
Шумоподавление	Система подавления окружающего шума
Направленность	Выделение источника полезного звука из окружающего шума.
Кнопка переключения программ	Устройство для изменения программ
Регулятор громкости	Устройство для регулировки уровня громкости
Аудиовход	Разъем для подключения дополнительных аудио устройств
Тиннитус-маскер	Система маскировки тиннитуса
Светодиодная система	Световая индикация режимов и состояний СА
Авто телефон	Функция автоматического переключения в режим телефонной катушки при поднесении телефонной трубки к СА

Дневник	Система сбора информации о работе СА.
Генератор сигналов для измерений In-Situ	Функция, позволяющая подавать в ухо пациента тестовые сигналы определенного уровня по средствам врачебного ПО и слухового аппарата, и на основании полученных данных – сформировать примерную аудиограмму потери слуха пациента.
Индукционная катушка	Устройство для приема электромагнитных колебаний звуковой частоты (н.п. в помещении, оснащенном индукционной системой) и прослушивании звуковых сигналов в том числе через телефонную трубку
Подавление внезапных шумов	Устранение внезапных шумов из потокового звукового сигнала с целью повышения его качества
Подавление реверберации	Подавления эхосигнала
Персональное шумоподавление	Индивидуальное устранение шума в зависимости от особенностей слуха каждого пользователя СА
Система подавления обратной связи разделяет естественные звуки, похожие на обратную связь, и истинную обратную связь	Устранение высокочастотного свиста (обратной связи) не оказывая воздействия на звуки похожие на него
Автоматическая программа для бинаурального использования мобильного телефона	Программа использования парных СА для одновременного переключения в режим разговора по мобильному телефону
Передача сигнала телефонного разговора в реальном времени на другое ухо, поэтому голос вызывающего абонента слышен в обоих ушах со средним преимуществом SNR 3,1 дБ	Передача сигнала телефонного разговора в реальном времени на другое ухо, поэтому голос вызывающего абонента слышен в обоих ушах со средним преимуществом SNR 3,1 дБ
FM – совместимость	Возможность подключения FM устройств
Автоматическое включение программы FM	Автоматическое включение программы FM при подключении FM устройств
Подавление импульсных шумов	Устранение импульсных шумов из потокового звукового сигнала с целью повышения его качества
Пользовательская частотно зависящая регулировка усиления, учитывающая индивидуальные данные аудиометрии	Регулировка в общем частотном диапазоне исходя из данных аудиограммы
Экспансия	Подавление уровня внутренних шумов СА
Имитация функции ушной раковины	Функция для определения места возникновения источника звука
Трехпозиционная автоматическая программа	Автоматическая, непрерывная и мгновенная адаптация к изменяющимся окружающим звукам для бесшумного перехода между

	звуковыми программами СА.
Нелинейная частотная компрессия	Улучшение восприятия и различения высокочастотных речевых сигналов и окружающих звуков
Многосегментная архитектура сжатия	Сжатие частотного диапазона в область слышимого для конкретного пользователя на основании результатов аудиометрии
Автоматическое повышение направленности речи	Выделение речевого сигнала из общей окружающей звуковой обстановки
Автоматическое определение и подавление шума ветра	Автоматическая локализация и устранение шума ветра
Повседневная автоматическая регулировка настроек	Запоминание изменения настроек, вносимых пользователем, в той или иной ситуации и автоматическое их применение
Анализатор акустической ситуации	Алгоритм распознавания акустической обстановки (тишина, речь в шуме, музыка, речь в громком шуме, речь в машине, и т.д.)
Адаптирование и уменьшение шума сзади в реальном времени	Функция непрерывного подавления шума сзади от пользователя, концентрируюсь на речи собеседника
Автоматический менеджер привыкания к СА	Встроенный алгоритм, позволяющий более комфортно привыкать к СА
Идентификация и улучшение речи, не увеличивая и не искажая более громкие звуки	Распознавание и улучшение речевого сигнала без воздействия на громкие звуки
Система подавления окружающих шумов для повышения комфорта, когда речи нет	Функция подавления окружающего шума при отсутствии речевого сигнала
Улучшение четкости восприятия звуков при меньшем увеличении громкости	Улучшение речевого сигнала при незначительном увеличении уровня громкости
Передача звука речи, поступающего сбоку или сзади, передается со слухового аппарата с наилучшим отношением "сигнал-шум"	Улучшение качества речевого сигнала, поступающего сбоку и сзади
Система повышения разборчивости речи в условиях промышленного шума	Функция улучшения качества речевого сигнала в условия промышленного шума
Разборчивость речи в спокойной ситуации (тишина)	Распознавание речевого сигнала при отсутствии постороннего шума
Целевые кривые в зависимости от языковой группы	Изменение формулы настройки СА в зависимости от языковой группы пользователя
Педиатрическая формула настройки	Формула настройки СА для слухопротезирования детей
Звуковая индикация	Звуковое оповещение от событиях или состоянии СА
Включение/выключение батарейным отсеком	Включение/выключение СА при помощи открытия/закрытия батарейного отсека
Задержка включения питания	Отсрочка включения СА для предотвращения неприятных звуков в момент его надевания
Блокиратор батарейного отсека	Приспособлении в корпусе СА, предотвращающее внезапное открытие

	батарейного отсека
Адаптер/Каблучок для программирования	Приспособление для подключения СА к программатору
Стандартный рожок	Элемент СА, предназначенный для проведения звука и крепления ушного вкладыша
Детский рожок	Элемент СА, предназначенный для проведения звука и крепления ушного вкладыша предназначенный для детей
Звукопроводящая трубка Open Fit	Элемент СА, предназначенный для проведения звука и снижения эффекта окклюзии и более комфортного и скрытого ношения
Цветовой маркер (правый/левый)	Цветовое обозначение принадлежности СА к правому или левому уху
Нанопокрытие	Покрытие, предотвращающее попадания влаги на СА
Естественная направленность	Определение источника звука, которое возникает за счет разного расстояния между микрофонами СА
Настраиваемая точка балансирования при смешанной направленности	Оптимизация качества звука при разных источниках полезного сигнала
Автоматическое переключение слухового аппарата из всенаправленного режима в направленный и наоборот	Автоматическое переключение слухового аппарата из всенаправленного режима в направленный и наоборот
Бинауральное автоматическое переключение слухового аппарата из всенаправленного режима в направленный и наоборот	Бинауральное автоматическое переключение слухового аппарата из всенаправленного режима в направленный и наоборот
Бинауральная технология: управление шумом ветра, управление промышленными шумами, направленность, разговор по телефону	Бинауральная технология: управление шумом ветра, управление промышленными шумами, направленность, разговор по телефону
Автоматическая фокусировка аппарата на единственном голосе в условиях диффузного фонового шума	Фокусировка на единственном собеседнике в условиях диффузного шума, для повышения разборчивости речи
Система улучшения восприятия речи в условиях диффузного шума	Функция улучшения речевого сигнала в условиях диффузного шума
Автоматический выбор направления речи и его передача на другое ухо, улучшая разборчивость речи без необходимости обращаться к динамику	Автоматический выбор направления речи и его передача на другое ухо, улучшая разборчивость речи без необходимости обращаться к динамику
Возможность беспроводной настройки, управления, подключения к медиа/аудио устройствам, беспроводному микрофону	Возможность беспроводной настройки, управления, подключения к медиа/аудио устройствам, беспроводному микрофону
Трансляция потокового аудио звука любой музыки или медиа файлов, проигрываемых через смартфон, телевизор, ПК и т.д. (стерео при бинауральном протезировании)	Трансляция потокового аудио звука любой музыки или медиа файлов, проигрываемых через смартфон, телевизор, ПК и т.д. (стерео при бинауральном протезировании)
Возможность персонализировать и	Возможность персонализировать и прикреплять

прикреплять к местонахождению настройки, в зависимости от того, что делают и куда идет пользователь	к местонахождению настройки, в зависимости от того, что делают и куда идет пользователь
Контроль громкости и настроек памяти с помощью смартфона	Изменение уровня громкости и программы при помощи смартфона
Автоматическая настройка громкости до комфортных значений согласно потребностям и индивидуальным предпочтениям пользователя в различных звуковых ситуациях	Автоматическая настройка громкости до комфортных значений согласно потребностям и индивидуальным предпочтениям пользователя в различных звуковых ситуациях
Автоматическое изменение настроек на основе персонализированных геотегов	Изменение настроек прослушивания в зависимости от местонахождения
Автоматическая адаптация во время поездки в автомобиле, к движущимся и асимметричным источникам шума, а также к любой реверберации и уменьшения коэффициента усиления	Автоматическая адаптация во время поездки в автомобиле, к движущимся и асимметричным источникам шума, а также к любой реверберации и уменьшения коэффициента усиления
Запись, воспроизведение и пересылка по электронной почте источников живого звука	Возможность записи, воспроизведения и пересылки по электронной почте голосовых сообщений
Возможность чтения сообщений и электронной почты с помощью смартфона через слуховой аппарат.	Прослушивание СМС и электронных сообщений при помощи смартфона
Функция записи аудиограммы в памяти слухового аппарата	Функция записи результатов аудиометрии в памяти слухового аппарата
Цифровая компрессия полного динамического диапазона в каждом канале (WDRC)	Настройка усиления для разных уровней входных сигналов, коэффициентов и порогов компрессии в каждом частотном канале
Музыкальный режим с расширенным динамическим диапазоном, медленной скоростью сжатия и большим усилением	Режим для прослушивания музыки
Оптимизированный музыкальный режим: музыкальная память, музыкальная адаптация, бинауральная музыкальная адаптация	Улучшенный режим для прослушивания музыки
Регулировка частоты разделения каналов	Настраиваемое количество каналов
Наличие разъема программирования	Наличия разъема для подключения программатора
Программируемая функция задержки включения	Настраиваемая отсрочка включения СА
Наличие отдельной регулировки усиления тихих, речевых и громких звуков	Независимая регулировка уровня низких, речевых и громких звуков
Возможность подключения к системе “ВибраТон”/”Умный дом” посредством магнитной индукции	Подключение к системе “ВибраТон”*/”Умный дом” посредством магнитной индукции
Возможность подключения к системе “ВибраТон”/”Умный дом” посредством беспроводной связи 2,402 ГГц - 2,48	Подключение к системе “ВибраТон”*/”Умный дом” посредством беспроводной связи 2,402 ГГц - 2,48 ГГц

ГГц	
Использование регулятора громкости как мощный инструмент настройки при работе с анализатором акустической ситуации	Возможность использования регулятора громкости в настройке СА
Автоматическое определение направления источника речи и мгновенная передача звука в ухо, которое находится дальше от говорящего	Функция автоматического определения направления источника речи и мгновенная передача звука в ухо, которое находится дальше от говорящего
Адаптивная автоматическая регулировка усиления	Автоматическое, адаптивное усиление уровня громкости
Автоматическая адаптивная направленность	Возможность общаться в шумной обстановке, передавая усиленный сигнал, идущий спереди от собеседника, и заглушая окружающие звуки, идущие с других направлений
Компрессия с возможностью переноса сигнала из высоких частот в более низкий/слышимый диапазон частот	Возможность переноса сигнала из высоких частот в более низкий/слышимый диапазон частот
Гибкая платформа с возможностью апгрейда прошивки СА, изменяя дополнительные параметры такие как количество каналов, программ, полос эквалайзера, типа подавления обратной связи, шумов, направленности микрофонов, при этом не затрагивая основные технические характеристики, согласно п.п. 1-16 таблицы №2	Функция изменения дополнительных параметров, таких как количество каналов, программ, полос эквалайзера, типа подавления обратной связи, шумов, направленности микрофонов, при этом не затрагивая основные технические характеристики
Возможность установки бесканального режима. Процессор работает без искусственного разделения входящих звуковых сигналов на каналы или полосы, обрабатывая звуковой сигнал как единое целое. Как результат чистое и естественное качество звука.	Возможность установки бесканального режима. Процессор работает без искусственного разделения входящих звуковых сигналов на каналы или полосы, обрабатывая звуковой сигнал как единое целое. Как результат чистое и естественное качество звука.
Шумоподавление в 128 полосах частот	Адаптивное, многоуровневое подавление шума в 128 частотных полосах.
Возможность отключения кнопки переключения программ	Отключение возможности изменения программы прослушивания
Возможность отключения регулятора громкости	Отключение возможности изменения уровня громкости
Самообучение	Запоминание изменения настроек, вносимых пользователем, в той или иной ситуации
Речь на ветру	Распознавание и улучшение речевого сигнала в условиях возникновения ветра
Защита речи	Сохранение уровня речевого сигнала собеседника при возникновении внезапных шумов
Расширенный тиннитус-маскер	Расширенная функция для маскировки тиннитуса
Возрастные настройки	Изменение целевых кривых формулы настройки

	в зависимости от возраста пользователя
Беспроводное программирование	Программирование без использования дополнительных приспособлений для подключения к программатору
Возможность применения переходника под 13-й элемент	Возможность использования элемента питания типа 13 для СА с 675 типом батареи
Акустически оптимизированный вент, позволяет снизить уровень окклюзии до минимального уровня благодаря оптимизации целевых расчётов и выбору идеальной «акустической массы» для каждого вента	Уменьшение эффекта окклюзии

* - Примечание: под термином «Система ВибраТон» подразумевается «Сигнализатор звука цифровой со световой и вибрационной индикацией для глухих, слабослышащих и пожилых людей «ВИБРАТОН» по ТУ 26.30.11-012-81271212-2017» производства ООО «Аурика», регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7629 от 19.10.2018

Комплектность

№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроводения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» (“Like”) по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017 (любая модель)		
2	Батарея размера 675		
3	Батарея-размера 312		
4	Батарея размера 13		
5	Переходник под 13 элемент		
6	Ушной вкладыш, размер 1		
7	Ушной вкладыш, размер 2		
8	Ушной вкладыш, размер 3		
9	Ушной вкладыш, размер 4		
10	Ушной вкладыш, размер 5		
11	Комплект цветowych маркеров левый и правый		
12	Руководство по эксплуатации/паспорт		
13	Футляр		
14	Картонная упаковка		
15	Детский рожок		
16	Шнур программирования, Правый		
17	Шнур программирования, Левый		
18	Адаптер для программирования		
19	Каблучок для программирования		

20	Программное обеспечение для программирования Аурика		
21	Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 1		
22	Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 2		
23	Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 3		
24	Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 4		
25	Звукопроводящая трубка OpenFit левая, размер 5		
26	Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 1		
27	Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 2		
28	Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 3		
29	Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 4		
30	Звукопроводящая трубка OpenFit правая, размер 5		
31	Аудио-шнур		

Всего комплект из _____ наименований

Подпись покупателя _____

Свидетельство о приемке

Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» вариант исполнения «...» _____
соответствует техническим условиям ТУ 26.60.14-019-81271212-2017

и признан годным к эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № _____

Заводской номер _____

Штамп ОТК

Владелец аппарата

Фамилия _____

Имя _____

Данные аппарата:

Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Лайк» по ТУ 26.60.14-019-81271212-2017 с принадлежностями
Модель (вариант исполнения) _____

Тип батареек:

Дата продажи /Начало гарантии:

____ / ____ / ____

дд мм гг

Сервисное обслуживание

Внимание!

Не забывайте о своевременном сервисном обслуживании Вашего аппарата!

Гарантийный талон № 1

На гарантийное обслуживание (ремонт)

слухового аппарата Лайк (Like) _____ № _____

Изъят « _____ » _____ 20 ____ г.

Ответственный за ремонт _____

(ф.и.о.)

(подпись)

Гарантийный талон № 1

На гарантийное обслуживание (ремонт)

слухового аппарата Лайк (Like) _____ № _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

Причины неисправности _____

(заполняется ремонтной организацией)

Кем продан _____

(наименование предприятия)

Подпись продавца _____ М.П.

Сведения о проведенном ремонте _____

(вид ремонта и краткие сведения о ремонте)

Ответственный за ремонт:

М.П.


ремонтной организации _____

(фамилия, личная подпись)

Владелец и его адрес _____

(фамилия, личная подпись владельца аппарата)

Прошито, пронумеровано
123 (сто двадцать три) листов
скреплено подписью и печатью
Генеральный директор
ООО «Аурика»

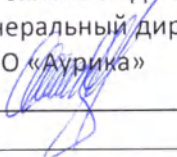 Мурзинов М.В.

