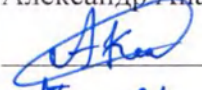


8

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель Костров

Александр Анатольевич

 А.А. Костров

« 15 » 11 2023 г.

Руководство по эксплуатации

Набор мебели медицинской для оснащения кабинета врача

(выпущено впервые)

2023 г.

1. Наименование и область применения медицинского изделия.

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с основными техническими данными, устройством и правилами пользования медицинским изделием «**Набор мебели медицинской для оснащения кабинета врача**», изготавливаемым по ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022 (далее по тексту - *Набор*) и предназначенным для оснащения кабинета врача в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля.

Область применения - лечебно-профилактические учреждения любого профиля.

Набор выпускается в следующих вариантах комплектации:

1	Набор мебели медицинской для оснащения кабинета врача № 1, в составе:
1.1	Стол врача для проведения терапевтических процедур, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
1.1.1	Стол врача для проведения терапевтических процедур 1200х600х750 мм, артикул 100140, в составе:
1.1.1.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.1.1.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.1.1.3	Столешница – 1 шт.;
1.1.1.4	Перемычка – 1 шт.;
1.1.1.5	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.1.1.6	Шуруп 2А3-13 – 20 шт.;
1.1.1.7	Опора регулируемая – 4 шт.;
1.1.1.8	Уголок крепежный – 10 шт.
1.1.2	Стол врача для проведения терапевтических процедур 1400х600х750 мм, артикул 100141, в составе:
1.1.2.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.1.2.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.1.2.3	Столешница – 1 шт.;
1.1.2.4	Перемычка – 1 шт.;
1.1.2.5	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.1.2.6	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
1.1.2.7	Опора регулируемая – 4 шт.;
1.1.2.8	Уголок крепежный – 12 шт.
1.1.3	Стол врача для проведения терапевтических процедур с тумбой 1200х600х750 мм, артикул 100142, в составе:
1.1.3.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.1.3.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.1.3.3	Столешница – 1 шт.;
1.1.3.4	Дверка – 1 шт.;
1.1.3.5	Полка – 1 шт.;
1.1.3.6	Ручка – 1 шт.;
1.1.3.7	Перемычка – 1 шт.;
1.1.3.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.1.3.9	Шуруп 2А3-13 – 20 шт.;
1.1.3.10	Опора регулируемая – 6 шт.;
1.1.3.11	Уголок крепежный – 10 шт.;
1.1.3.12	Полкодержатель – 4 шт.
1.1.4	Стол врача для проведения терапевтических процедур с тумбой 1400х600х750 мм, артикул 100143, в составе:
1.1.4.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.1.4.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.1.4.3	Столешница – 1 шт.;
1.1.4.4	Дверка – 1 шт.;
1.1.4.5	Полка – 1 шт.;
1.1.4.6	Ручка – 1 шт.;
1.1.4.7	Перемычка – 1 шт.;

1.1.4.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.1.4.9	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
1.1.4.10	Опора регулируемая – 6 шт.;
1.1.4.11	Уголок крепежный – 12 шт.;
1.1.4.12	Полкодержатель – 4 шт.
1.1.5	Стол врача для проведения терапевтических процедур с тремя ящиками, артикул 100144, в составе:
1.1.5.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.1.5.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.1.5.3	Столешница – 1 шт.;
1.1.5.4	Ящик – 3 шт.;
1.1.5.5	Ручка – 3 шт.;
1.1.5.6	Перемычка – 1 шт.;
1.1.5.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.1.5.8	Шуруп 2А3-13 – 64 шт.;
1.1.5.9	Опора регулируемая – 6 шт.;
1.1.5.10	Уголок крепежный – 10 шт.;
1.1.6	Стол врача для проведения терапевтических процедур 1200х600х750 мм № 2, артикул 100145, в составе:
1.1.6.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.1.6.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.1.6.3	Столешница – 1 шт.;
1.1.6.4	Перемычка – 1 шт.;
1.1.6.5	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.1.6.6	Шуруп 2А3-13 – 20 шт.;
1.1.6.7	Опора регулируемая – 4 шт.;
1.1.6.8	Уголок крепежный – 10 шт.
1.1.7	Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с тремя ящиками, артикул 100146, в составе:
1.1.7.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.1.7.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.1.7.3	Столешница – 1 шт.;
1.1.7.4	Ящик – 3 шт.;
1.1.7.5	Ручка – 3 шт.;
1.1.7.6	Перемычка – 1 шт.;
1.1.7.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.1.7.8	Шуруп 2А3-13 – 68 шт.;
1.1.7.9	Опора регулируемая – 6 шт.;
1.1.7.10	Уголок крепежный – 12 шт.;
1.1.8	Стол врача для проведения терапевтических процедур 1400х700х750 мм, артикул 100147, в составе:
1.1.8.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.1.8.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.1.8.3	Столешница – 1 шт.;
1.1.8.4	Перемычка – 1 шт.;
1.1.8.5	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.1.8.6	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
1.1.8.7	Опора регулируемая – 4 шт.;
1.1.8.8	Уголок крепежный – 12 шт.
1.1.9	Стол врача для проведения терапевтических процедур двутумбовый с тремя ящиками и тумбой, артикул 100148, в составе:
1.1.9.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.1.9.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.1.9.3	Столешница – 1 шт.;
1.1.9.4	Ящик – 3 шт.;
1.1.9.5	Ручка – 3 шт.;

1.1.9.6	Дверь – 1 шт.;
1.1.9.7	Полка – 1 шт.;
1.1.9.8	Перемишка – 1 шт.;
1.1.9.9	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.1.9.10	Шуруп 2А3-13 – 68 шт.;
1.1.9.11	Опора регулируемая – 8 шт.;
1.1.9.12	Уголок крепежный – 12 шт.;
1.1.9.13	Полкодержатель – 4 шт.
1.1.10	Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с дверцей, артикул 100149, в составе:
1.1.10.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.1.10.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.1.10.3	Столешница – 1 шт.;
1.1.10.4	Дверка – 1 шт.;
1.1.10.5	Полка – 1 шт.;
1.1.10.6	Ручка – 1 шт.;
1.1.10.7	Перемишка – 1 шт.;
1.1.10.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.1.10.9	Шуруп 2А3-13 – 20 шт.;
1.1.10.10	Опора регулируемая – 6 шт.;
1.1.10.11	Уголок крепежный – 10 шт.;
1.1.10.12	Полкодержатель – 4 шт.
1.1.11	Стол врача для проведения терапевтических процедур со встроенной тумбой с дверцей, артикул 100150, в составе:
1.1.11.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.1.11.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.1.11.3	Столешница – 1 шт.;
1.1.11.4	Дверка – 1 шт.;
1.1.11.5	Полка – 1 шт.;
1.1.11.6	Ручка – 1 шт.;
1.1.11.7	Перемишка – 1 шт.;
1.1.11.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.1.11.9	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
1.1.11.10	Опора регулируемая – 6 шт.;
1.1.11.11	Уголок крепежный – 12 шт.;
1.1.11.12	Полкодержатель – 4 шт.
1.1.12	Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с тремя ящиками 1200х600х750 мм, артикул 100151, в составе:
1.1.12.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.1.12.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.1.12.3	Столешница – 1 шт.;
1.1.12.4	Ящик – 3 шт.;
1.1.12.5	Ручка – 3 шт.;
1.1.12.6	Перемишка – 1 шт.;
1.1.12.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.1.12.8	Шуруп 2А3-13 – 64 шт.;
1.1.12.9	Опора регулируемая – 6 шт.;
1.1.12.10	Уголок крепежный – 10 шт.;
1.1.13	Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с тремя ящиками 1400х700х750 мм, артикул 100152, в составе:
1.1.13.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.1.13.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.1.13.3	Столешница – 1 шт.;
1.1.13.4	Ящик – 3 шт.;
1.1.13.5	Ручка – 3 шт.;
1.1.13.6	Перемишка – 1 шт.;

1.1.13.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.1.13.8	Шуруп 2А3-13 – 68 шт.;
1.1.13.9	Опора регулируемая – 6 шт.;
1.1.10.10	Уголок крепежный – 12 шт.;
1.1.14	Стол врача для проведения терапевтических процедур двутумбовый, с тремя ящиками в одной и с дверкой в другой, артикул 100153, в составе:
1.1.14.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.1.14.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.1.14.3	Столешница – 1 шт.;
1.1.14.4	Ящик – 3 шт.;
1.1.14.5	Ручка – 3 шт.;
1.1.14.6	Дверь – 1 шт.;
1.1.14.7	Полка – 1 шт.;
1.1.14.8	Переключатель – 1 шт.;
1.1.14.9	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.1.14.10	Шуруп 2А3-13 – 68 шт.;
1.1.14.11	Опора регулируемая – 8 шт.;
1.1.14.12	Уголок крепежный – 12 шт.;
1.1.10.13	Полкодержатель – 4 шт.;
1.2	Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения – 1 шт. из перечня:
1.2.1	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100118
1.2.2	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100119, в составе:
1.2.2.1	Стенка боковая – 2 шт.;
1.2.2.2	Дно, верх – 2 шт.;
1.2.2.3	Стенка задняя – 1 шт.;
1.2.2.4	Полка – 1 шт.;
1.2.2.5	Дверь – 1 шт.;
1.2.2.6	Стяжка-ТЕ 15 – 8 шт.;
1.2.2.7	Шток – 8 шт.;
1.2.2.8	Шкант 8х30 – 12 шт.;
1.2.2.9	Петля – 2 шт.;
1.2.2.10	Ручка-скоба – 1 шт.;
1.2.2.11	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
1.2.2.12	Заглушка эксцентрик – 8 шт.;
1.2.2.13	Колесо – 4 шт.;
1.2.3	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100120, в составе:
1.2.3.1	Стенка боковая – 2 шт.;
1.2.3.2	Дно, верх – 2 шт.;
1.2.3.3	Стенка задняя – 1 шт.;
1.2.3.4	Полка – 1 шт.;
1.2.3.5	Дверь – 1 шт.;
1.2.3.6	Стяжка-ТЕ 15 – 12 шт.;
1.2.3.7	Шток – 12 шт.;
1.2.3.8	Шкант 8х30 – 16 шт.;
1.2.3.9	Петля – 2 шт.;
1.2.3.10	Ручка-скоба – 2 шт.;
1.2.3.11	Шуруп 2А3-13 – 36 шт.;
1.2.3.12	Заглушка эксцентрик – 12 шт.;
1.2.3.13	Колесо – 4 шт.;
1.2.3.14	Компл. направляющих – 1 шт.;
1.2.4	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100121

1.2.5	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100122
1.2.6	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой № 2, артикул 100123
1.2.7	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100124
1.2.8	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100125
1.2.9	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100126
1.2.10	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками, артикул 100127
1.2.11	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 2, артикул 100128
1.2.12	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой № 2, артикул 100129, в составе:
1.2.12.1	Стенка боковая – 2 шт.;
1.2.12.2	Дно, верх – 2 шт.;
1.2.12.3	Стенка задняя – 1 шт.;
1.2.12.4	Полка – 1 шт.;
1.2.12.5	Дверь – 1 шт.;
1.2.12.6	Стяжка-ТЕ 15 – 8 шт.;
1.2.12.7	Шток – 8 шт.;
1.2.12.8	Шкант 8х30 – 8 шт.;
1.2.12.9	Петля – 2 шт.;
1.2.12.10	Ручка-скоба – 1 шт.;
1.2.12.11	Шуруп 2А3-13 – 26 шт.;
1.2.12.12	Заглушка эксцентрик – 8 шт.;
1.2.12.13	Колесо – 4 шт.;
1.2.12.14	Полкодержатель – 4 шт.;
1.2.13	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 3, артикул 100130, в составе:
1.2.13.1	Стенка боковая – 2 шт.;
1.2.13.2	Дно, верх – 2 шт.;
1.2.13.3	Стенка задняя – 1 шт.;
1.2.13.4	Ящик – 3 шт.;
1.2.13.5	Стяжка-ТЕ 15 – 20 шт.;
1.2.13.6	Шток – 20 шт.;
1.2.13.7	Шкант 8х30 – 32 шт.;
1.2.13.8	Ручка-скоба – 3 шт.;
1.2.13.9	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
1.2.13.10	Заглушка эксцентрик – 20 шт.;
1.2.13.11	Колесо – 4 шт.;
1.2.13.12	Компл.направляющих – 3 шт.;
1.3	Шкаф медицинский навесной. в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
1.3.1	Шкаф медицинский навесной двустворчатый, артикул 100221
1.3.2	Шкаф медицинский навесной двустворчатый остекленный, артикул 100222
1.3.3	Шкаф медицинский навесной двустворчатый с полкой, артикул 100223
1.3.4	Шкаф медицинский навесной двустворчатый остекленный с полкой, артикул 100224
1.4	Шкаф медицинский, в вариантах исполнения – 1 шт. из перечня (при необходимости):
1.4.1	Шкаф медицинский с двумя дверьми и пятью полками, с регулируемыми опорами, артикул 100219, в составе:
1.4.1.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.4.1.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.4.1.3	Дно, верх – 2 шт.;
1.4.1.4	Полка – 5 шт.;
1.4.1.5	Дверь – 2 шт.;
1.4.1.6	Конфирмат – 16 шт.;
1.4.1.78	Ключ шестигранный – 1 шт.;

1.4.1.9	Шкант 8х30 – 16 шт.;
1.4.1.10	Петля – 6 шт.;
1.4.1.11	Ручка-скоба – 2 шт.;
1.4.1.12	Шуруп 2А3-13 – 50 шт.;
1.4.1.13	Евровинт V6310 – 24 шт.;
1.4.1.14	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.4.1.15	Заглушка конфирмат – 16 шт.;
1.4.1.16	Полкодержатель – 8 шт.;
1.4.1.17	Профиль стыковочный – 1 шт.
1.4.2	Шкаф медицинский двухстворчатый, с двумя вертикальными отделениями, с регулируемыми опорами, артикул 100220, в составе:
1.4.2.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.4.2.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.4.2.3	Дно, верх – 2 шт.;
1.4.2.4	Полка – 6 шт.;
1.4.2.5	Дверь – 2 шт.;
1.4.2.6	Штанга – 1 шт.;
1.4.2.7	Перегородка (стойка) – 1 шт.;
1.4.2.8	Конфирмат – 20 шт.;
1.4.2.9	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.4.2.10	Шкант 8х30 – 20 шт.;
1.4.2.11	Петля – 6 шт.;
1.4.2.12	Ручка-скоба – 2 шт.;
1.4.2.13	Шуруп 2А3-13 – 64 шт.;
1.4.2.14	Евровинт V6310 – 24 шт.;
1.4.2.15	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.4.2.16	Заглушка конфирмат – 20 шт.;
1.4.2.17	Полкодержатель – 16 шт.;
1.4.2.18	Штангодержатель – 2 шт.
1.4.3	Шкаф медицинский одностворчатый с открытой секцией, артикул 100233, в составе:
1.4.3.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.4.3.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.4.3.3	Дно, верх – 2 шт.;
1.4.3.4	Полка – 4 шт.;
1.4.3.5	Дверь – 1 шт.;
1.4.3.6	Конфирмат – 12 шт.;
1.4.3.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.4.3.8	Шкант 8х30 – 12 шт.;
1.4.3.9	Петля – 2 шт.;
1.4.3.10	Ручка-скоба большая – 1 шт.;
1.4.3.11	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
1.4.3.12	Евровинт V6310 – 8 шт.;
1.4.3.13	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.4.3.14	Полкодержатель – 12 шт.;
1.4.3.15	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
1.4.4	Шкаф медицинский одностворчатый с двумя дверцами, артикул 100234, в составе:
1.4.4.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.4.4.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.4.4.3	Дно, верх – 2 шт.;
1.4.4.4	Полка – 2 шт.;
1.4.4.5	Полка стеклянная – 2 шт.;
1.4.4.6	Дверь – 2 шт.;
1.4.4.7	Конфирмат – 12 шт.;
1.4.4.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.4.4.9	Шкант 8х30 – 12 шт.;
1.4.4.10	Петля – 2 шт.;

1.4.4.11	Петля с доводчиком – 2 шт.;
1.4.4.12	Ручка-скоба большая – 1 шт.;
1.4.4.13	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
1.4.4.14	Евровинт V6310 – 12 шт.;
1.4.4.15	Винт М5х12 – 4 шт.;
1.4.4.16	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.4.4.17	Полкодержатель – 4 шт.;
1.4.4.18	Полкодержатель под ст. – 8 шт.;
1.4.4.19	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
1.4.5	Шкаф медицинский двухсекционный, двустворчатый с четырьмя дверцами, артикул 100235, в составе:
1.4.5.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.4.5.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.4.5.3	Дно, верх – 2 шт.;
1.4.5.4	Полка – 2 шт.;
1.4.5.5	Полка стеклянная – 2 шт.;
1.4.5.6	Дверь – 4 шт.;
1.4.5.7	Конфирмат – 12 шт.;
1.4.5.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.4.5.9	Шкант 8х30 – 12 шт.;
1.4.5.10	Петля – 4 шт.;
1.4.5.11	Петля с доводчиком – 2 шт.;
1.4.5.12	Ручка-скоба большая – 2 шт.;
1.4.5.13	Шуруп 2А3-13 – 50 шт.;
1.4.5.14	Евровинт V6310 – 24 шт.;
1.4.5.15	Винт М5х12 – 8 шт.;
1.4.5.16	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.4.5.17	Полкодержатель – 12 шт.;
1.4.5.18	Полкодержатель под ст. – 8 шт.;
1.4.5.19	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
1.5	Руководство по эксплуатации – 1 шт.
2	Набор мебели медицинской для оснащения кабинета врача № 2, в составе:
2.1	Стол врача для проведения терапевтических процедур, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
2.1.1	Стол врача для проведения терапевтических процедур 1200х600х750 мм, артикул 100140, в составе:
2.1.1.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.1.1.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.1.1.3	Столешница – 1 шт.;
2.1.1.4	Перемишка – 1 шт.;
2.1.1.5	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.1.1.6	Шуруп 2А3-13 – 20 шт.;
2.1.1.7	Опора регулируемая – 4 шт.;
2.1.1.8	Уголок крепежный – 10 шт.
2.1.2	Стол врача для проведения терапевтических процедур 1400х600х750 мм, артикул 100141, в составе:
2.1.2.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.1.2.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.1.2.3	Столешница – 1 шт.;
2.1.2.4	Перемишка – 1 шт.;
2.1.2.5	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.1.2.6	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
2.1.2.7	Опора регулируемая – 4 шт.;
2.1.2.8	Уголок крепежный – 12 шт.
2.1.3	Стол врача для проведения терапевтических процедур с тумбой 1200х600х750 мм, артикул 100142, в составе:

2.1.3.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.1.3.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.1.3.3	Столешница – 1 шт.;
2.1.3.4	Дверка – 1 шт.;
2.1.3.5	Полка – 1 шт.;
2.1.3.6	Ручка – 1 шт.;
2.1.3.7	Переключатель – 1 шт.;
2.1.3.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.1.3.9	Шуруп 2А3-13 – 20 шт.;
2.1.3.10	Опора регулируемая – 6 шт.;
2.1.3.11	Уголок крепежный – 10 шт.;
2.1.3.12	Полкодержатель – 4 шт.
2.1.4	Стол врача для проведения терапевтических процедур с тумбой 1400х600х750 мм, артикул 100143, в составе:
2.1.4.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.1.4.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.1.4.3	Столешница – 1 шт.;
2.1.4.4	Дверка – 1 шт.;
2.1.4.5	Полка – 1 шт.;
2.1.4.6	Ручка – 1 шт.;
2.1.4.7	Переключатель – 1 шт.;
2.1.4.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.1.4.9	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
2.1.4.10	Опора регулируемая – 6 шт.;
2.1.4.11	Уголок крепежный – 12 шт.;
2.1.4.12	Полкодержатель – 4 шт.
2.1.5	Стол врача для проведения терапевтических процедур с тремя ящиками, артикул 100144, в составе:
2.1.5.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.1.5.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.1.5.3	Столешница – 1 шт.;
2.1.5.4	Ящик – 3 шт.;
2.1.5.5	Ручка – 3 шт.;
2.1.5.6	Переключатель – 1 шт.;
2.1.5.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.1.5.8	Шуруп 2А3-13 – 64 шт.;
2.1.5.9	Опора регулируемая – 6 шт.;
2.1.5.10	Уголок крепежный – 10 шт.;
2.1.6	Стол врача для проведения терапевтических процедур 1200х600х750 мм № 2, артикул 100145, в составе:
2.1.6.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.1.6.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.1.6.3	Столешница – 1 шт.;
2.1.6.4	Переключатель – 1 шт.;
2.1.6.5	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.1.6.6	Шуруп 2А3-13 – 20 шт.;
2.1.6.7	Опора регулируемая – 4 шт.;
2.1.6.8	Уголок крепежный – 10 шт.
2.1.7	Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с тремя ящиками, артикул 100146, в составе:
2.1.7.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.1.7.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.1.7.3	Столешница – 1 шт.;
2.1.7.4	Ящик – 3 шт.;
2.1.7.5	Ручка – 3 шт.;
2.1.7.6	Переключатель – 1 шт.;

2.1.7.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.1.7.8	Шуруп 2А3-13 – 68 шт.;
2.1.7.9	Опора регулируемая – 6 шт.;
2.1.7.10	Уголок крепежный – 12 шт.;
2.1.8	Стол врача для проведения терапевтических процедур 1400x700x750 мм, артикул 100147, в составе:
2.1.8.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.1.8.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.1.8.3	Столешница – 1 шт.;
2.1.8.4	Перемычка – 1 шт.;
2.1.8.5	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.1.8.6	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
2.1.8.7	Опора регулируемая – 4 шт.;
2.1.8.8	Уголок крепежный – 12 шт.;
2.1.9	Стол врача для проведения терапевтических процедур двутумбовый с тремя ящиками и тумбой, артикул 100148, в составе:
2.1.9.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.1.9.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.1.9.3	Столешница – 1 шт.;
2.1.9.4	Ящик – 3 шт.;
2.1.9.5	Ручка – 3 шт.;
2.1.9.6	Дверь – 1 шт.;
2.1.9.7	Полка – 1 шт.;
2.1.9.8	Перемычка – 1 шт.;
2.1.9.9	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.1.9.10	Шуруп 2А3-13 – 68 шт.;
2.1.9.11	Опора регулируемая – 8 шт.;
2.1.9.12	Уголок крепежный – 12 шт.;
2.1.9.13	Полкодержатель – 4 шт.;
2.1.10	Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с дверцей, артикул 100149, в составе:
2.1.10.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.1.10.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.1.10.3	Столешница – 1 шт.;
2.1.10.4	Дверка – 1 шт.;
2.1.10.5	Полка – 1 шт.;
2.1.10.6	Ручка – 1 шт.;
2.1.10.7	Перемычка – 1 шт.;
2.1.10.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.1.10.9	Шуруп 2А3-13 – 20 шт.;
2.1.10.10	Опора регулируемая – 6 шт.;
2.1.10.11	Уголок крепежный – 10 шт.;
2.1.10.12	Полкодержатель – 4 шт.;
2.1.11	Стол врача для проведения терапевтических процедур со встроенной тумбой с дверцей, артикул 100150, в составе:
2.1.11.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.1.11.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.1.11.3	Столешница – 1 шт.;
2.1.11.4	Дверка – 1 шт.;
2.1.11.5	Полка – 1 шт.;
2.1.11.6	Ручка – 1 шт.;
2.1.11.7	Перемычка – 1 шт.;
2.1.11.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.1.11.9	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
2.1.11.10	Опора регулируемая – 6 шт.;
2.1.11.11	Уголок крепежный – 12 шт.;

2.1.11.12	Полкодержатель – 4 шт.
2.1.12	Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с тремя ящиками 1200х600х750 мм, артикул 100151, в составе:
2.1.12.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.1.12.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.1.12.3	Столешница – 1 шт.;
2.1.12.4	Ящик – 3 шт.;
2.1.12.5	Ручка – 3 шт.;
2.1.12.6	Перемычка – 1 шт.;
2.1.12.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.1.12.8	Шуруп 2А3-13 – 64 шт.;
2.1.12.9	Опора регулируемая – 6 шт.;
2.1.12.10	Уголок крепежный – 10 шт.;
2.1.13	Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с тремя ящиками 1400х700х750 мм, артикул 100152, в составе:
2.1.13.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.1.13.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.1.13.3	Столешница – 1 шт.;
2.1.13.4	Ящик – 3 шт.;
2.1.13.5	Ручка – 3 шт.;
2.1.13.6	Перемычка – 1 шт.;
2.1.13.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.1.13.8	Шуруп 2А3-13 – 68 шт.;
2.1.13.9	Опора регулируемая – 6 шт.;
2.1.13.10	Уголок крепежный – 12 шт.;
2.1.14	Стол врача для проведения терапевтических процедур двутумбовый, с тремя ящиками в одной и с дверкой в другой, артикул 100153, в составе:
2.1.14.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.1.14.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.1.14.3	Столешница – 1 шт.;
2.1.14.4	Ящик – 3 шт.;
2.1.14.5	Ручка – 3 шт.;
2.1.14.6	Дверь – 1 шт.;
2.1.14.7	Полка – 1 шт.;
2.1.14.8	Перемычка – 1 шт.;
2.1.14.9	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.1.14.10	Шуруп 2А3-13 – 68 шт.;
2.1.14.11	Опора регулируемая – 8 шт.;
2.1.14.12	Уголок крепежный – 12 шт.;
2.1.14.13	Полкодержатель – 4 шт.
2.2	Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
2.2.1	Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, нишей и дверцей, артикул 100135, в составе:
2.2.1.1	Основание – 1 шт.;
2.2.1.2	Тумба – 1 шт.;
2.2.1.3	Столешница – 1 шт.;
2.2.1.4	Стойка – 1 шт.;
2.2.1.5	Винт М6х45 – 2 шт.;
2.2.1.6	Гайка М6 – 2 шт.;
2.2.1.7	Шайба 6 – 2 шт.;
2.2.1.8	Шуруп 5х35 – 6 шт.;
2.2.1.9	Саморез 4,2х19 – 2 шт.;
2.2.1.10	Колесо мебельное – 4 шт.
2.2.2	Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, выдвижным ящиком и дверцей, артикул 100136, в составе:

2.2.2.1	Основание – 1 шт.;
2.2.2.2	Тумба – 1 шт.;
2.2.2.3	Столешница – 1 шт.;
2.2.2.4	Стойка – 1 шт.;
2.2.2.5	Винт М6х45 – 2 шт.;
2.2.2.6	Гайка М6 – 2 шт.;
2.2.2.7	Шайба 6 – 2 шт.;
2.2.2.8	Шуруп 5х35 – 6 шт.;
2.2.2.9	Саморез 4,2х19 – 2 шт.;
2.2.2.10	Колесо мебельное – 4 шт.
2.2.3	Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, нишей и дверцей №2, артикул 100137, в составе:
2.2.3.1	Основание – 1 шт.;
2.2.3.2	Тумба – 1 шт.;
2.2.3.3	Столешница – 1 шт.;
2.2.3.4	Стойка – 1 шт.;
2.2.3.5	Винт М6х45 – 2 шт.;
2.2.3.6	Гайка М6 – 2 шт.;
2.2.3.7	Шайба 6 – 2 шт.;
2.2.3.8	Шуруп 5х35 – 6 шт.;
2.2.3.9	Саморез 4,2х19 – 2 шт.;
2.2.3.10	Колесо мебельное – 4 шт.
2.2.4	Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, выдвижным ящиком и дверцей №2, артикул 100138, в составе:
2.2.4.1	Основание – 1 шт.;
2.2.4.2	Тумба – 1 шт.;
2.2.4.3	Столешница – 1 шт.;
2.2.4.4	Стойка – 1 шт.;
2.2.4.5	Винт М6х45 – 2 шт.;
2.2.4.6	Гайка М6 – 2 шт.;
2.2.4.7	Шайба 6 – 2 шт.;
2.2.4.8	Шуруп 5х35 – 6 шт.;
2.2.4.9	Саморез 4,2х19 – 2 шт.;
2.2.4.10	Колесо мебельное – 4 шт.
2.3	Шкаф медицинский, в вариантах исполнения – 1 шт. из перечня (при необходимости):
2.3.1	Шкаф медицинский с двумя дверьми и пятью полками, с регулируемыми опорами, артикул 100219, в составе:
2.3.1.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.3.1.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.3.1.3	Дно, верх – 2 шт.;
2.3.1.4	Полка – 5 шт.;
2.3.1.5	Дверь – 2 шт.;
2.3.1.6	Конфирмат – 16 шт.;
2.3.1.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.3.1.8	Шкант 8х30 – 16 шт.;
2.3.1.9	Петля – 6 шт.;
2.3.1.10	Ручка-скоба – 2 шт.;
2.3.1.11	Шуруп 2А3-13 – 50 шт.;
2.3.1.12	Евровинт V6310 – 24 шт.;
2.3.1.13	Регулируемая опора – 4 шт.;
2.3.1.14	Заглушка конфирмат – 16 шт.;
2.3.1.15	Полкодержатель – 8 шт.;
2.3.1.16	Профиль стыковочный – 1 шт.
2.3.2	Шкаф медицинский двустворчатый, с двумя вертикальными отделениями, с регулируемыми опорами, артикул 100220, в составе:
2.3.2.1	Боковая стенка – 2 шт.;

2.3.2.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.3.2.3	Дно, верх – 2 шт.;
2.3.2.4	Полка – 6 шт.;
2.3.2.5	Дверь – 2 шт.;
2.3.2.6	Штанга – 1 шт.;
2.3.2.7	Перегородка (стойка) – 1 шт.;
2.3.2.8	Конфирмат – 20 шт.;
2.3.2.9	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.3.2.10	Шкант 8х30 – 20 шт.;
2.3.2.11	Петля – 6 шт.;
2.3.2.12	Ручка-скоба – 2 шт.;
2.3.2.13	Шуруп 2А3-13 – 64 шт.;
2.3.2.14	Евровинт V6310 – 24 шт.;
2.3.2.15	Регулируемая опора – 4 шт.;
2.3.2.16	Заглушка конфирмат – 20 шт.;
2.3.2.17	Полкодержатель – 16 шт.;
2.3.2.18	Штангодержатель – 2 шт.
2.3.3	Шкаф медицинский одностворчатый с открытой секцией, артикул 100233, в составе:
2.3.3.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.3.3.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.3.3.3	Дно, верх – 2 шт.;
2.3.3.4	Полка – 4 шт.;
2.3.3.5	Дверь – 1 шт.;
2.3.3.6	Конфирмат – 12 шт.;
2.3.3.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.3.3.8	Шкант 8х30 – 12 шт.;
2.3.3.9	Петля – 2 шт.;
2.3.3.10	Ручка-скоба большая – 1 шт.;
2.3.3.11	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
2.3.3.12	Евровинт V6310 – 8 шт.;
2.3.3.13	Регулируемая опора – 4 шт.;
2.3.3.14	Полкодержатель – 12 шт.;
2.3.3.15	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
2.3.4	Шкаф медицинский одностворчатый с двумя дверцами, артикул 100234, в составе:
2.3.4.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.3.4.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.3.4.3	Дно, верх – 2 шт.;
2.3.4.4	Полка – 2 шт.;
2.3.4.5	Полка стеклянная – 2 шт.;
2.3.4.6	Дверь – 2 шт.;
2.3.4.7	Конфирмат – 12 шт.;
2.3.4.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.3.4.9	Шкант 8х30 – 12 шт.;
2.3.4.10	Петля – 2 шт.;
2.3.4.11	Петля с доводчиком – 2 шт.;
2.3.4.12	Ручка-скоба большая – 1 шт.;
2.3.4.13	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
2.3.4.14	Евровинт V6310 – 12 шт.;
2.3.4.15	Винт М5х12 – 4 шт.;
2.3.4.16	Регулируемая опора – 4 шт.;
2.3.4.17	Полкодержатель – 4 шт.;
2.3.4.18	Полкодержатель под ст. – 8 шт.;
2.3.4.19	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
2.3.5	Шкаф медицинский двухсекционный, двухстворчатый с четырьмя дверцами, артикул 100235, в составе:
2.3.5.1	Боковая стенка – 2 шт.;

2.3.5.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.3.5.3	Дно, верх – 2 шт.;
2.3.5.4	Полка – 2 шт.;
2.3.5.5	Полка стеклянная – 2 шт.;
2.3.5.6	Дверь – 4 шт.;
2.3.5.7	Конфирмат – 12 шт.;
2.3.5.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.3.5.9	Шкант 8х30 – 12 шт.;
2.3.5.10	Петля – 4 шт.;
2.3.5.11	Петля с доводчиком – 2 шт.;
2.3.5.12	Ручка-скоба большая – 2 шт.;
2.3.5.13	Шуруп 2А3-13 – 50 шт.;
2.3.5.14	Евровинт V6310 – 24 шт.;
2.3.5.15	Винт М5х12 – 8 шт.;
2.3.5.16	Регулируемая опора – 4 шт.;
2.3.5.17	Полкодержатель – 12 шт.;
2.3.5.18	Полкодержатель под ст. – 8 шт.;
2.3.5.19	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
2.4	Стол медицинский, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
2.4.1	Стол медицинский 850х750х750 мм, артикул 100168, в составе:
2.4.1.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
2.4.1.2	Ножка – 4 шт.;
2.4.1.3	Перемычка – 1 шт.;
2.4.1.4	Гайка М10 – 4 шт.;
2.4.1.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
2.4.2	Стол медицинский 1000х750х750 мм, артикул 100169, в составе:
2.4.2.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
2.4.2.2	Ножка – 4 шт.;
2.4.2.3	Перемычка – 1 шт.;
2.4.2.4	Гайка М10 – 4 шт.;
2.4.2.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
2.4.3	Стол медицинский 850х750х750 мм №2, артикул 100170, в составе:
2.4.3.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
2.4.3.2	Ножка – 4 шт.;
2.4.3.3	Перемычка – 1 шт.;
2.4.3.4	Гайка М10 – 4 шт.;
2.4.3.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
2.4.4	Стол медицинский 1000х750х750 мм №2, артикул 100171, в составе:
2.4.4.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
2.4.4.2	Ножка – 4 шт.;
2.4.4.3	Перемычка – 1 шт.;
2.4.4.4	Гайка М10 – 4 шт.;
2.4.4.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
2.5	Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3.	Набор мебели медицинской для оснащения кабинета врача № 3, в составе:
3.1	Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
3.1.1	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100118
3.1.2	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100119, в составе:
3.1.2.1	Стенка боковая – 2 шт.;
3.1.2.2	Дно, верх – 2 шт.;
3.1.2.3	Стенка задняя – 1 шт.;
3.1.2.4	Полка – 1 шт.;
3.1.2.5	Дверь – 1 шт.;
3.1.2.6	Стяжка-ГЕ 15 – 8 шт.;

3.1.2.7	Шток – 8 шт.;
3.1.2.8	Шкант 8х30 – 12 шт.;
3.1.2.9	Петля – 2 шт.;
3.1.2.10	Ручка-скоба – 1 шт.;
3.1.2.11	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
3.1.2.12	Заглушка эксцентрик – 8 шт.;
3.1.2.13	Колесо – 4 шт.;
3.1.3	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100120, в составе:
3.1.3.1	Стенка боковая – 2 шт.;
3.1.3.2	Дно, верх – 2 шт.;
3.1.3.3	Стенка задняя – 1 шт.;
3.1.3.4	Полка – 1 шт.;
3.1.3.5	Дверь – 1 шт.;
3.1.3.6	Стяжка-ТЕ 15 – 12 шт.;
3.1.3.7	Шток – 12 шт.;
3.1.3.8	Шкант 8х30 – 16 шт.;
3.1.3.9	Петля – 2 шт.;
3.1.3.10	Ручка-скоба – 2 шт.;
3.1.3.11	Шуруп 2А3-13 – 36 шт.;
3.1.3.12	Заглушка эксцентрик – 12 шт.;
3.1.3.13	Колесо – 4 шт.;
3.1.3.14	Компл.направляющих – 1 шт.;
3.1.4	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100121
3.1.5	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100122
3.1.6	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой № 2, артикул 100123
3.1.7	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100124
3.1.8	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100125
3.1.9	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100126
3.1.10	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками, артикул 100127
3.1.11	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 2, артикул 100128
3.1.12	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой № 2, артикул 100129, в составе:
3.1.12.1	Стенка боковая – 2 шт.;
3.1.12.2	Дно, верх – 2 шт.;
3.1.12.3	Стенка задняя – 1 шт.;
3.1.12.4	Полка – 1 шт.;
3.1.12.5	Дверь – 1 шт.;
3.1.12.6	Стяжка-ТЕ 15 – 8 шт.;
3.1.12.7	Шток – 8 шт.;
3.1.12.8	Шкант 8х30 – 8 шт.;
3.1.12.9	Петля – 2 шт.;
3.1.12.10	Ручка-скоба – 1 шт.;
3.1.12.11	Шуруп 2А3-13 – 26 шт.;
3.1.12.12	Заглушка эксцентрик – 8 шт.;
3.1.12.13	Колесо – 4 шт.;
3.1.12.14	Полкодержатель – 4 шт.;
3.1.13	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 3, артикул 100130, в составе:
3.1.13.1	Стенка боковая – 2 шт.;
3.1.13.2	Дно, верх – 2 шт.;
3.1.13.3	Стенка задняя – 1 шт.;

3.1.13.4	Ящик – 3 шт.;
3.1.13.5	Стяжка-ТЕ 15 – 20 шт.;
3.1.13.6	Шток – 20 шт.;
3.1.13.7	Шкант 8х30 – 32 шт.;
3.1.13.8	Ручка-скоба – 3 шт.;
3.1.13.9	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
3.1.13.10	Заглушка эксцентрик – 20 шт.;
3.1.13.11	Колесо – 4 шт.;
3.1.13.12	Компл.направляющих – 3 шт.;
3.2	Тумба медицинская под аппаратуру, артикул 100139 - 1 шт. (при необходимости), в составе:
3.2.1	Боковая стенка – 2 шт.;
3.2.2	Задняя стенка – 1 шт.;
3.2.3	Порог – 1 шт.;
3.2.4	Дно, верх – 2 шт.;
3.2.5	Полка – 2 шт.;
3.2.6	Дверь – 2 шт.;
3.2.7	Стяжка- ТЕ 15 – 4 шт.;
3.2.8	Шток – 4 шт.;
3.2.9	Конфирмат – 4 шт.;
3.2.10	Ключ шестигранный – 1 шт.;
3.2.11	Шкант 8х30 – 12 шт.;
3.2.12	Петля – 4 шт.;
3.2.13	Ручка-скоба – 2 шт.;
3.2.14	Шуруп 2А3-13 – 30 шт.;
3.2.15	Подпятник – 4 шт.;
3.2.16	Полкодержатель – 8 шт.;
3.2.17	Заглушка эксцентрик – 4 шт.;
3.2.18	Заглушка конфирмат – 4 шт.;
3.2.19	Профиль стыковочный – 1 шт.;
3.3	Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
3.3.1	Кушетка медицинская смотровая бесступенчатая, артикул 100265, в составе:
3.3.1.1	Ложе – 1 шт.;
3.3.1.2	Стойка левая – 1 шт.;
3.3.1.3	Стойка правая – 1 шт.;
3.3.1.4	Стяжка – 1 шт.;
3.3.1.5	Болт М10х45 – 6 шт.;
3.3.1.6	Шайба – 6 шт.;
3.3.1.7	Заглушка – 4 шт.;
3.3.2	Кушетка медицинская смотровая со ступенчатым подголовником, артикул 100266, в составе:
3.3.2.1	Ложе с каркасом и подголовником – 1 шт.;
3.3.2.2	Ножка – 4 шт.;
3.3.2.3	Гайка М10 – 8 шт.;
3.3.2.4	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;
3.3.2.5	Заглушка – 6 шт.;
3.4	Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
3.4.1	Ширма медицинская стационарная, 1 секция, артикул 100284, в составе:
3.4.1.1	Экран – 1 шт.;
3.4.1.2	Стяжка – 2 шт.;
3.4.1.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
3.4.1.4	Стойка двойная – 1 шт.;
3.4.1.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
3.4.1.6	Болт М6х30 – 4 шт.;

3.4.1.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
3.4.1.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
3.4.1.9	Шайба 4 – 2 шт.;
3.4.1.10	Гайка М4 – 2 шт.;
3.4.1.11	Заглушка МСК302/4 – 5 шт.;
3.4.2	Ширма медицинская стационарная, 2 секции, артикул 100285, в составе:
3.4.2.1	Экран – 1 шт.;
3.4.2.2	Стяжка – 2 шт.;
3.4.2.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
3.4.2.4	Стойка двойная – 1 шт.;
3.4.2.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
3.4.2.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
3.4.2.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
3.4.2.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
3.4.2.9	Шайба 4 – 2 шт.;
3.4.2.10	Гайка М4 – 2 шт.;
3.4.2.11	Заглушка МСК302/4 – 5 шт.;
3.4.3	Ширма медицинская стационарная, 3 секции, артикул 100286, в составе:
3.4.3.1	Экран – 1 шт.;
3.4.3.2	Стяжка – 2 шт.;
3.4.3.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
3.4.3.4	Стойка двойная – 1 шт.;
3.4.3.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
3.4.3.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
3.4.3.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
3.4.3.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
3.4.3.9	Шайба 4 – 2 шт.;
3.4.3.10	Гайка М4 – 2 шт.;
3.4.3.11	Заглушка МСК302/4 – 5 шт.;
3.4.4	Ширма медицинская стационарная, 1 секция, на плоских ножках, артикул 100287, в составе:
3.4.4.1	Экран – 1 шт.;
3.4.4.2	Стяжка – 2 шт.;
3.4.4.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
3.4.4.4	Стойка двойная – 1 шт.;
3.4.4.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
3.4.4.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
3.4.4.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
3.4.4.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
3.4.4.9	Шайба 4 – 2 шт.;
3.4.4.10	Гайка М4 – 2 шт.;
3.4.5	Ширма медицинская стационарная, 2 секции, на плоских ножках, артикул 100288, в составе:
3.4.5.1	Экран – 1 шт.;
3.4.5.2	Стяжка – 2 шт.;
3.4.5.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
3.4.5.4	Стойка двойная – 1 шт.;
3.4.5.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
3.4.5.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
3.4.5.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
3.4.5.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
3.4.5.9	Шайба 4 – 2 шт.;
3.4.5.10	Гайка М4 – 2 шт.;
3.4.6	Ширма медицинская стационарная, 3 секции, на плоских ножках, артикул 100289, в составе:
3.4.6.1	Экран – 1 шт.;

3.4.6.2	Стяжка – 2 шт.;
3.4.6.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
3.4.6.4	Стойка двойная – 1 шт.;
3.4.6.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
3.4.6.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
3.4.6.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
3.4.6.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
3.4.6.9	Шайба 4 – 2 шт.;
3.4.6.10	Гайка М4 – 2 шт.;
3.5	Стол медицинский, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
3.5.1	Стол медицинский 850х750х750 мм, артикул 100168, в составе:
3.5.1.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
3.5.1.2	Ножка – 4 шт.;
3.5.1.3	Перемычка – 1 шт.;
3.5.1.4	Гайка М10 – 4 шт.;
3.5.1.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
3.5.2	Стол медицинский 1000х750х750 мм, артикул 100169, в составе:
3.5.2.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
3.5.2.2	Ножка – 4 шт.;
3.5.2.3	Перемычка – 1 шт.;
3.5.2.4	Гайка М10 – 4 шт.;
3.5.2.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
3.5.3	Стол медицинский 850х750х750 мм №2, артикул 100170, в составе:
3.5.3.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
3.5.3.2	Ножка – 4 шт.;
3.5.3.3	Перемычка – 1 шт.;
3.5.3.4	Гайка М10 – 4 шт.;
3.5.3.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
3.5.4	Стол медицинский 1000х750х750 мм №2, артикул 100171, в составе:
3.5.4.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
3.5.4.2	Ножка – 4 шт.;
3.5.4.3	Перемычка – 1 шт.;
3.5.4.4	Гайка М10 – 4 шт.;
3.5.4.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
3.6	Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4	Набор мебели медицинской для оснащения кабинета врача № 4, в составе:
4.1	Тумба медицинская под аппаратуру, артикул 100139 - 1 шт., в составе:
4.1.1	Боковая стенка – 2 шт.;
4.1.2	Задняя стенка – 1 шт.;
4.1.3	Порог – 1 шт.;
4.1.4	Дно, верх – 2 шт.;
4.1.5	Полка – 2 шт.;
4.1.6	Дверь – 2 шт.;
4.1.7	Стяжка- ТЕ 15 – 4 шт.;
4.1.8	Шток – 4 шт.;
4.1.9	Конфирмат – 4 шт.;
4.1.10	Ключ шестигранный – 1 шт.;
4.1.11	Шкант 8х30 – 12 шт.;
4.1.12	Петля – 4 шт.;
4.1.13	Ручка-скоба – 2 шт.;
4.1.14	Шуруп 2А3-13 – 30 шт.;
4.1.15	Подпятник – 4 шт.;
4.1.16	Полкодержатель – 8 шт.;
4.1.17	Заглушка эксцентрик – 4 шт.;
4.1.18	Заглушка конфирмат – 4 шт.;
4.1.19	Профиль стыковочный – 1 шт.;

4.2	Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
4.2.1	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100118
4.2.2	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100119, в составе:
4.2.2.1	Стенка боковая – 2 шт.;
4.2.2.2	Дно, верх – 2 шт.;
4.2.2.3	Стенка задняя – 1 шт.;
4.2.2.4	Полка – 1 шт.;
4.2.2.5	Дверь – 1 шт.;
4.2.2.6	Стяжка-ТЕ 15 – 8 шт.;
4.2.2.7	Шток – 8 шт.;
4.2.2.8	Шкант 8х30 – 12 шт.;
4.2.2.9	Петля – 2 шт.;
4.2.2.10	Ручка-скоба – 1 шт.;
4.2.2.11	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
4.2.2.12	Заглушка эксцентрик – 8 шт.;
4.2.2.13	Колесо – 4 шт.;
4.2.3	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100120, в составе:
4.2.3.1	Стенка боковая – 2 шт.;
4.2.3.2	Дно, верх – 2 шт.;
4.2.3.3	Стенка задняя – 1 шт.;
4.2.3.4	Полка – 1 шт.;
4.2.3.5	Дверь – 1 шт.;
4.2.3.6	Стяжка-ТЕ 15 – 12 шт.;
4.2.3.7	Шток – 12 шт.;
4.2.3.8	Шкант 8х30 – 16 шт.;
4.2.3.9	Петля – 2 шт.;
4.2.3.10	Ручка-скоба – 2 шт.;
4.2.3.11	Шуруп 2А3-13 – 36 шт.;
4.2.3.12	Заглушка эксцентрик – 12 шт.;
4.2.3.13	Колесо – 4 шт.;
4.2.3.14	Компл.направляющих – 1 шт.;
4.2.4	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100121
4.2.5	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100122
4.2.6	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой № 2, артикул 100123
4.2.7	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100124
4.2.8	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100125
4.2.9	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100126
4.2.10	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками, артикул 100127
4.2.11	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 2, артикул 100128
4.2.12	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой № 2, артикул 100129, в составе:
4.2.12.1	Стенка боковая – 2 шт.;
4.2.12.2	Дно, верх – 2 шт.;
4.2.12.3	Стенка задняя – 1 шт.;
4.2.12.4	Полка – 1 шт.;
4.2.12.5	Дверь – 1 шт.;
4.2.12.6	Стяжка-ТЕ 15 – 8 шт.;
4.2.12.7	Шток – 8 шт.;

4.2.12.8	Шкант 8х30 – 8 шт.;
4.2.12.9	Петля – 2 шт.;
4.2.12.10	Ручка-скоба – 1 шт.;
4.2.12.11	Шуруп 2А3-13 – 26 шт.;
4.2.12.12	Заглушка эксцентрик – 8 шт.;
4.2.12.13	Колесо – 4 шт.;
4.2.12.14	Полкодержатель – 4 шт.;
4.2.13	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 3, артикул 100130, в составе:
4.2.13.1	Стенка боковая – 2 шт.;
4.2.13.2	Дно, верх – 2 шт.;
4.2.13.3	Стенка задняя – 1 шт.;
4.2.13.4	Ящик – 3 шт.;
4.2.13.5	Стяжка-ТЕ 15 – 20 шт.;
4.2.13.6	Шток – 20 шт.;
4.2.13.7	Шкант 8х30 – 32 шт.;
4.2.13.8	Ручка-скоба – 3 шт.;
4.2.13.9	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
4.2.13.10	Заглушка эксцентрик – 20 шт.;
4.2.13.11	Колесо – 4 шт.;
4.2.13.12	Компл.направляющих – 3 шт.;
4.3	Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
4.3.1	Кушетка медицинская смотровая бесступенчатая, артикул 100265, в составе:
4.3.1.1	Ложе – 1 шт.;
4.3.1.2	Стойка левая – 1 шт.;
4.3.1.3	Стойка правая – 1 шт.;
4.3.1.4	Стяжка – 1 шт.;
4.3.1.5	Болт М10х45 – 6 шт.;
4.3.1.6	Шайба – 6 шт.;
4.3.1.7	Заглушка – 4 шт.;
4.3.2	Кушетка медицинская смотровая со ступенчатым подголовником, артикул 100266, в составе:
4.3.2.1	Ложе с каркасом и подголовником – 1 шт.;
4.3.2.2	Ножка – 4 шт.;
4.3.2.3	Гайка М10 – 8 шт.;
4.3.2.4	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;
4.3.2.5	Заглушка – 6 шт.;
4.4	Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
4.4.1	Ширма медицинская передвижная, 1 секция, артикул 100290, в составе:
4.4.1.1	Экран – 1 шт.;
4.4.1.2	Стяжка – 2 шт.;
4.4.1.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
4.4.1.4	Стойка двойная – 1 шт.;
4.4.1.5	Колесо – 3 шт.;
4.4.1.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
4.4.1.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
4.4.1.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
4.4.1.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
4.4.1.10	Шайба 4 – 2 шт.;
4.4.1.11	Гайка М4 – 2 шт.;
4.4.1.12	Заглушка МСК302/4 – 2 шт.;
4.4.2	Ширма медицинская передвижная, 2 секции, артикул 100291, в составе:
4.4.2.1	Экран – 1 шт.;
4.4.2.2	Стяжка – 2 шт.;

4.4.2.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
4.4.2.4	Стойка двойная – 1 шт.;
4.4.2.5	Колесо – 3 шт.;
4.4.2.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
4.4.2.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
4.4.2.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
4.4.2.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
4.4.2.10	Шайба 4 – 2 шт.;
4.4.2.11	Гайка М4 – 2 шт.;
4.4.2.12	Заглушка МСК302/4 – 2 шт.;
4.4.3	Ширма медицинская передвижная, 3 секции, артикул 100292, в составе:
4.4.3.1	Экран – 1 шт.;
4.4.3.2	Стяжка – 2 шт.;
4.4.3.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
4.4.3.4	Стойка двойная – 1 шт.;
4.4.3.5	Колесо – 3 шт.;
4.4.3.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
4.4.3.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
4.4.3.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
4.4.3.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
4.4.3.10	Шайба 4 – 2 шт.;
4.4.3.11	Гайка М4 – 2 шт.;
4.4.3.12	Заглушка МСК302/4 – 2 шт.;
4.4.4	Ширма медицинская передвижная, 1 секция, на плоских ножках, артикул 100293, в составе:
4.4.4.1	Экран – 1 шт.;
4.4.4.2	Стяжка – 2 шт.;
4.4.4.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
4.4.4.4	Стойка двойная – 1 шт.;
4.4.4.5	Колесо – 3 шт.;
4.4.4.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
4.4.4.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
4.4.4.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
4.4.4.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
4.4.4.10	Шайба 4 – 2 шт.;
4.4.4.11	Гайка М4 – 2 шт.;
4.4.5	Ширма медицинская передвижная, 2 секции, на плоских ножках, артикул 100294, в составе:
4.4.5.1	Экран – 1 шт.;
4.4.5.2	Стяжка – 2 шт.;
4.4.5.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
4.4.5.4	Стойка двойная – 1 шт.;
4.4.5.5	Колесо – 3 шт.;
4.4.5.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
4.4.5.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
4.4.5.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
4.4.5.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
4.4.5.10	Шайба 4 – 2 шт.;
4.4.5.11	Гайка М4 – 2 шт.;
4.4.6	Ширма медицинская передвижная, 3 секции, на плоских ножках, артикул 100295, в составе:
4.4.6.1	Экран – 1 шт.;
4.4.6.2	Стяжка – 2 шт.;
4.4.6.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
4.4.6.4	Стойка двойная – 1 шт.;
4.4.6.5	Колесо – 3 шт.;

4.4.6.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
4.4.6.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
4.4.6.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
4.4.6.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
4.4.6.10	Шайба 4 – 2 шт.;
4.4.6.11	Гайка М4 – 2 шт.;
4.5	Стол медицинский инструментальный, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
4.5.1	Стол медицинский инструментальный с нишей и дверкой, артикул 100173, в составе:
4.5.1.1	Основание – 1 шт.;
4.5.1.2	Заклепка М6 резьбовая – 38 шт.;
4.5.1.3	Винт 6х10 мм – 42 шт.;
4.5.1.4	Футорка М6 – 4 шт.;
4.5.1.5	Боковина – 2 шт.;
4.5.1.6	Замок мебельный – 1 шт.;
4.5.1.7	Ручка врезная – 1 шт.;
4.5.1.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
4.5.1.9	Карточная петля – 2 шт.;
4.5.1.10	Столешница – 1 шт.;
4.5.2	Стол медицинский инструментальный с выдвижным ящиком и дверкой, артикул 100174, в составе:
4.5.2.1	Основание – 1 шт.;
4.5.2.2	Заклепка М6 резьбовая – 52 шт.;
4.5.2.3	Винт 6х10 мм – 56 шт.;
4.5.2.4	Футорка М6 – 4 шт.;
4.5.2.5	Боковина – 2 шт.;
4.5.2.6	Замок мебельный – 1 шт.;
4.5.2.7	Ручка врезная – 2 шт.;
4.5.2.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
4.5.2.9	Карточная петля – 2 шт.;
4.5.2.10	Столешница – 1 шт.;
4.5.3	Стол медицинский инструментальный с тремя выдвижными ящиками, артикул 100175, в составе:
4.5.3.1	Основание – 1 шт.;
4.5.3.2	Заклепка М6 резьбовая – 79 шт.;
4.5.3.3	Винт 6х10 мм – 83 шт.;
4.5.3.4	Футорка М6 – 4 шт.;
4.5.3.5	Боковина – 2 шт.;
4.5.3.6	Замок мебельный – 1 шт.;
4.5.3.7	Ручка врезная – 3 шт.;
4.5.3.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
4.5.3.9	Карточная петля – 2 шт.;
4.5.3.10	Столешница – 1 шт.;
4.5.3.11	Направляющая роликовая – 6 шт.;
4.5.4	Стол медицинский инструментальный с двумя нишами и дверками, артикул 100176, в составе:
4.5.4.1	Основание – 1 шт.;
4.5.4.2	Заклепка М6 резьбовая – 54 шт.;
4.5.4.3	Винт 6х10 мм – 58 шт.;
4.5.4.4	Футорка М6 – 4 шт.;
4.5.4.5	Боковина – 3 шт.;
4.5.4.6	Замок мебельный – 2 шт.;
4.5.4.7	Ручка врезная – 2 шт.;
4.5.4.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
4.5.4.9	Карточная петля – 4 шт.;
4.5.4.10	Столешница – 1 шт.;

4.5.5	Стол медицинский инструментальный широкий с двумя выдвижными ящиками и нишей, артикул 100177, в составе:
4.5.5.1	Основание – 1 шт.;
4.5.5.2	Заклепка М6 резьбовая – 65 шт.;
4.5.5.3	Винт 6х10 мм – 69 шт.;
4.5.5.4	Футорка М6 – 4 шт.;
4.5.5.5	Боковина – 2 шт.;
4.5.5.6	Ручка врезная – 2 шт.;
4.5.5.7	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
4.5.5.8	Столешница – 1 шт.;
4.5.5.9	Направляющая роликовая – 4 шт.
4.5.6	Стол медицинский инструментальный широкий с тремя выдвижными ящиками, артикул 100178, в составе:
4.5.6.1	Основание – 1 шт.;
4.5.6.2	Заклепка М6 резьбовая – 79 шт.;
4.5.6.3	Винт 6х10 мм – 83 шт.;
4.5.6.4	Футорка М6 – 4 шт.;
4.5.6.5	Боковина – 2 шт.;
4.5.6.6	Замок мебельный – 1 шт.;
4.5.6.7	Ручка врезная – 3 шт.;
4.5.6.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
4.5.6.9	Карточная петля – 2 шт.;
4.5.6.10	Столешница – 1 шт.;
4.5.6.11	Направляющая роликовая – 6 шт.
4.5.7	Стол медицинский инструментальный с двумя выдвижными ящиками и дверками, артикул 100179, в составе:
4.5.7.1	Основание – 1 шт.;
4.5.7.2	Заклепка М6 резьбовая – 80 шт.;
4.5.7.3	Винт 6х10 мм – 86 шт.;
4.5.7.4	Футорка М6 – 6 шт.;
4.5.7.5	Боковина – 3 шт.;
4.5.7.6	Замок мебельный – 2 шт.;
4.5.7.7	Ручка врезная – 4 шт.;
4.5.7.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
4.5.7.9	Карточная петля – 4 шт.;
4.5.7.10	Столешница – 1 шт.;
4.5.8	Стол медицинский инструментальный с четырьмя выдвижными ящиками и дверкой, артикул 100180, в составе:
4.5.8.1	Основание – 1 шт.;
4.5.8.2	Заклепка М6 резьбовая – 107 шт.;
4.5.8.3	Винт 6х10 мм – 116 шт.;
4.5.8.4	Футорка М6 – 6 шт.;
4.5.8.5	Боковина – 3 шт.;
4.5.8.6	Замок мебельный – 1 шт.;
4.5.8.7	Ручка врезная – 5 шт.;
4.5.8.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
4.5.8.9	Карточная петля – 2 шт.;
4.5.8.10	Столешница – 1 шт.;
4.5.8.11	Направляющая роликовая – 8 шт.
4.6	Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5.	Набор мебели медицинской для оснащения кабинета врача № 5, в составе:
5.1	Шкаф медицинский навесной, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
5.1.1	Шкаф медицинский навесной двустворчатый, артикул 100221
5.1.2	Шкаф медицинский навесной двустворчатый остекленный, артикул 100222
5.1.3	Шкаф медицинский навесной двустворчатый с полкой, артикул 100223
5.1.4	Шкаф медицинский навесной двустворчатый остекленный с полкой, артикул 100224

5.2	Шкаф медицинский, в вариантах исполнения – 1 шт. из перечня:
5.2.1	Шкаф медицинский с двумя дверьми и пятью полками, с регулируемыми опорами, артикул 100219, в составе:
5.2.1.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.1.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.1.3	Дно, верх – 2 шт.;
5.2.1.4	Полка – 5 шт.;
5.2.1.5	Дверь – 2 шт.;
5.2.1.6	Конфирмат – 16 шт.;
5.2.1.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.1.8	Шкант 8х30 – 16 шт.;
5.2.1.9	Петля – 6 шт.;
5.2.1.10	Ручка-скоба – 2 шт.;
5.2.1.11	Шуруп 2А3-13 – 50 шт.;
5.2.1.12	Евровинт V6310 – 24 шт.;
5.2.1.13	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.2.1.14	Заглушка конфирмат – 16 шт.;
5.2.1.15	Полкодержатель – 8 шт.;
5.2.1.16	Профиль стыковочный – 1 шт.
5.2.2	Шкаф медицинский двустворчатый, с двумя вертикальными отделениями, с регулируемыми опорами, артикул 100220, в составе:
5.2.2.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.2.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.2.3	Дно, верх – 2 шт.;
5.2.2.4	Полка – 6 шт.;
5.2.2.5	Дверь – 2 шт.;
5.2.2.6	Штанга – 1 шт.;
5.2.2.7	Перегородка (стойка) – 1 шт.;
5.2.2.8	Конфирмат – 20 шт.;
5.2.2.9	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.2.10	Шкант 8х30 – 20 шт.;
5.2.2.11	Петля – 6 шт.;
5.2.2.12	Ручка-скоба – 2 шт.;
5.2.2.13	Шуруп 2А3-13 – 64 шт.;
5.2.2.14	Евровинт V6310 – 24 шт.;
5.2.2.15	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.2.2.16	Заглушка конфирмат – 20 шт.;
5.2.2.17	Полкодержатель – 16 шт.;
5.2.2.18	Штангодержатель – 2 шт.
5.2.3	Шкаф медицинский одностворчатый с открытой секцией, артикул 100233, в составе:
5.2.3.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.3.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.3.3	Дно, верх – 2 шт.;
5.2.3.4	Полка – 4 шт.;
5.2.3.5	Дверь – 1 шт.;
5.2.3.6	Конфирмат – 12 шт.;
5.2.3.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.3.8	Шкант 8х30 – 12 шт.;
5.2.3.9	Петля – 2 шт.;
5.2.3.10	Ручка-скоба большая – 1 шт.;
5.2.3.11	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
5.2.3.12	Евровинт V6310 – 8 шт.;
5.2.3.13	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.2.3.14	Полкодержатель – 12 шт.;
5.2.3.15	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
5.2.4	Шкаф медицинский одностворчатый с двумя дверцами, артикул 100234, в составе:

5.2.4.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.4.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.4.3	Дно, верх – 2 шт.;
5.2.4.4	Полка – 2 шт.;
5.2.4.5	Полка стеклянная – 2 шт.;
5.2.4.6	Дверь – 2 шт.;
5.2.4.7	Конфирмат – 12 шт.;
5.2.4.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.4.9	Шкант 8х30 – 12 шт.;
5.2.4.10	Петля – 2 шт.;
5.2.4.11	Петля с доводчиком – 2 шт.;
5.2.4.12	Ручка-скоба большая – 1 шт.;
5.2.4.13	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
5.2.4.14	Евровинт V6310 – 12 шт.;
5.2.4.15	Винт М5х12 – 4 шт.;
5.2.4.16	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.2.4.17	Полкодержатель – 4 шт.;
5.2.4.18	Полкодержатель под ст. – 8 шт.;
5.2.4.19	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
5.2.5	Шкаф медицинский двухсекционный, двустворчатый с четырьмя дверцами, артикул 100235, в составе:
5.2.5.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.5.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.5.3	Дно, верх – 2 шт.;
5.2.5.4	Полка – 2 шт.;
5.2.5.5	Полка стеклянная – 2 шт.;
5.2.5.6	Дверь – 4 шт.;
5.2.5.7	Конфирмат – 12 шт.;
5.2.5.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.5.9	Шкант 8х30 – 12 шт.;
5.2.5.10	Петля – 4 шт.;
5.2.5.11	Петля с доводчиком – 2 шт.;
5.2.5.12	Ручка-скоба большая – 2 шт.;
5.2.5.13	Шуруп 2А3-13 – 50 шт.;
5.2.5.14	Евровинт V6310 – 24 шт.;
5.2.5.15	Винт М5х12 – 8 шт.;
5.2.5.16	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.2.5.17	Полкодержатель – 12 шт.;
5.2.5.18	Полкодержатель под ст. – 8 шт.;
5.2.5.19	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
5.3	Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
5.3.1	Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х300х2000 мм, артикул 100255, в составе:
5.3.1.1	Стойка – 4 шт.;
5.3.1.2	Полка – 4 шт.;
5.3.1.3	Подпятник – 4 шт.;
5.3.1.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
5.3.1.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
5.3.1.6	Шайба 5 – 40 шт.;
5.3.1.7	Гайка М5 – 40 шт.;
5.3.2	Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х400х2000 мм, артикул 100256, в составе:
5.3.2.1	Стойка – 4 шт.;
5.3.2.2	Полка – 4 шт.;
5.3.2.3	Подпятник – 4 шт.;

5.3.2.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
5.3.2.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
5.3.2.6	Шайба 5 – 40 шт.;
5.3.2.7	Гайка М5 – 40 шт.
5.3.3	Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х500х2000 мм, артикул 100257, в составе:
5.3.3.1	Стойка – 4 шт.;
5.3.3.2	Полка – 4 шт.;
5.3.3.3	Подпятник – 4 шт.;
5.3.3.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
5.3.3.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
5.3.3.6	Шайба 5 – 40 шт.;
5.3.3.7	Гайка М5 – 40 шт.
5.3.4	Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х300х2000 мм, артикул 100258, в составе:
5.3.4.1	Стойка – 4 шт.;
5.3.4.2	Полка – 4 шт.;
5.3.4.3	Подпятник – 5 шт.;
5.3.4.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
5.3.4.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
5.3.4.6	Шайба 5 – 40 шт.;
5.3.4.7	Гайка М5 – 40 шт.
5.3.5	Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х400х2000 мм, артикул 100259, в составе:
5.3.5.1	Стойка – 4 шт.;
5.3.5.2	Полка – 4 шт.;
5.3.5.3	Подпятник – 5 шт.;
5.3.5.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
5.3.5.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
5.3.5.6	Шайба 5 – 40 шт.;
5.3.5.7	Гайка М5 – 40 шт.
5.3.6	Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х300х2000 мм, артикул 100260, в составе:
5.3.6.1	Стойка – 4 шт.;
5.3.6.2	Полка – 4 шт.;
5.3.6.3	Подпятник – 5 шт.;
5.3.6.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
5.3.6.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
5.3.6.6	Шайба 5 – 40 шт.;
5.3.6.7	Гайка М5 – 40 шт.
5.4	Стол медицинский. в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
5.4.1	Стол медицинский 850х750х750 мм, артикул 100168, в составе:
5.4.1.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
5.4.1.2	Ножка – 4 шт.;
5.4.1.3	Перемычка – 1 шт.;
5.4.1.4	Гайка М10 – 4 шт.;
5.4.1.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
5.4.2	Стол медицинский 1000х750х750 мм, артикул 100169, в составе:
5.4.2.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
5.4.2.2	Ножка – 4 шт.;
5.4.2.3	Перемычка – 1 шт.;
5.4.2.4	Гайка М10 – 4 шт.;
5.4.2.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
5.4.3	Стол медицинский 850х750х750 мм №2, артикул 100170, в составе:
5.4.3.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
5.4.3.2	Ножка – 4 шт.;

5.4.3.3	Перемишка – 1 шт.;
5.4.3.4	Гайка М10 – 4 шт.;
5.4.3.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
5.4.4	Стол медицинский 1000х750х750 мм №2, артикул 100171, в составе:
5.4.4.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
5.4.4.2	Ножка – 4 шт.;
5.4.4.3	Перемишка – 1 шт.;
5.4.4.4	Гайка М10 – 4 шт.;
5.4.4.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
5.5	Руководство по эксплуатации – 1 шт.
6.	Набор мебели медицинской для оснащения кабинета врача № 6, в составе:
6.1	Шкаф медицинский, в вариантах исполнения – 1 шт. из перечня:
6.1.1	Шкаф медицинский одностворчатый с открытой секцией, артикул 100233, в составе:
6.1.1.1	Боковая стенка – 2 шт.;
6.1.1.2	Задняя стенка – 1 шт.;
6.1.1.3	Дно, верх – 2 шт.;
6.1.1.4	Полка – 4 шт.;
6.1.1.5	Дверь – 1 шт.;
6.1.1.6	Конфирмат – 12 шт.;
6.1.1.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
6.1.1.8	Шкант 8х30 – 12 шт.;
6.1.1.9	Петля – 2 шт.;
6.1.1.10	Ручка-скоба большая – 1 шт.;
6.1.1.11	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
6.1.1.12	Евровинт V6310 – 8 шт.;
6.1.1.13	
6.1.1.14	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.1.1.15	Полкодержатель – 12 шт.;
	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
6.1.2	Шкаф медицинский одностворчатый с двумя дверцами, артикул 100234, в составе:
6.1.2.1	Боковая стенка – 2 шт.;
6.1.2.2	Задняя стенка – 1 шт.;
6.1.2.3	Дно, верх – 2 шт.;
6.1.2.4	Полка – 2 шт.;
6.1.2.5	Полка стеклянная – 2 шт.;
6.1.2.6	Дверь – 2 шт.;
6.1.2.7	Конфирмат – 12 шт.;
6.1.2.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
6.1.2.9	Шкант 8х30 – 12 шт.;
6.1.2.10	Петля – 2 шт.;
6.1.2.11	Петля с доводчиком – 2 шт.;
6.1.2.12	Ручка-скоба большая – 1 шт.;
6.1.2.13	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
6.1.2.14	Евровинт V6310 – 12 шт.;
6.1.2.15	Винт М5х12 – 4 шт.;
6.1.2.16	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.1.2.17	Полкодержатель – 4 шт.;
6.1.2.18	Полкодержатель под ст. – 8 шт.;
6.1.2.19	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
6.1.3	Шкаф медицинский двухсекционный, двухстворчатый с четырьмя дверцами, артикул 100235, в составе:
6.1.3.1	Боковая стенка – 2 шт.;
6.1.3.2	Задняя стенка – 1 шт.;
6.1.3.3	Дно, верх – 2 шт.;
6.1.3.4	Полка – 2 шт.;
6.1.3.5	Полка стеклянная – 2 шт.;

6.1.3.6	Дверь – 4 шт.;
6.1.3.7	Конфирмат – 12 шт.;
6.1.3.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
6.1.3.9	Шкант 8х30 – 12 шт.;
6.1.3.10	Петля – 4 шт.;
6.1.3.11	Петля с доводчиком – 2 шт.;
6.1.3.12	Ручка-скоба большая – 2 шт.;
6.1.3.13	Шуруп 2А3-13 – 50 шт.;
6.1.3.14	Евровинт V6310 – 24 шт.;
6.1.3.15	Винт М5х12 – 8 шт.;
6.1.3.16	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.1.3.17	Полкодержатель – 12 шт.;
6.1.3.18	Полкодержатель под ст. – 8 шт.;
6.1.3.19	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
6.2	Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
6.2.1	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100236, в составе:
6.2.1.1	Стенка задняя – 1 шт.;
6.2.1.2	Полка – 2 шт.;
6.2.1.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
6.2.1.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
6.2.1.5	Короб – 3 шт.;
6.2.1.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.1.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.1.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
6.2.1.9	Саморез 4,2х13 – 25 шт.;
6.2.1.10	Саморез 3х17 – 4 шт.;
6.2.1.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
6.2.1.12	Замок мебельный – 1 шт.;
6.2.1.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
6.2.1.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
6.2.1.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
6.2.1.16	Полкодержатель – 16 шт.;
6.2.1.17	Гайка М5+Шайба 5 – 11 шт.;
6.2.1.18	Винт М5х12 – 16 шт.;
6.2.2	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100237, в составе:
6.2.2.1	Стенка задняя – 1 шт.;
6.2.2.2	Полка – 2 шт.;
6.2.2.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
6.2.2.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
6.2.2.5	Короб – 3 шт.;
6.2.2.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.2.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.2.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
6.2.2.9	Саморез 4,2х13 – 25 шт.;
6.2.2.10	Саморез 3х17 – 4 шт.;
6.2.2.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
6.2.2.12	Замок мебельный – 1 шт.;
6.2.2.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
6.2.2.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
6.2.2.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
6.2.2.16	Полкодержатель – 16 шт.;
6.2.2.17	Гайка М5+Шайба 5 – 11 шт.;

6.2.2.18	Винт М5х12 – 16 шт.;
6.2.3	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100238, в составе:
6.2.3.1	Стенка задняя – 2 шт.;
6.2.3.2	Полка – 2 шт.;
6.2.3.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
6.2.3.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
6.2.3.5	Короб – 3 шт.;
6.2.3.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.3.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.3.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
6.2.3.9	Саморез 4,2х13 – 30 шт.;
6.2.3.10	Саморез 3х17 – 4 шт.;
6.2.3.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
6.2.3.12	Замок мебельный – 1 шт.;
6.2.3.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
6.2.3.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
6.2.3.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
6.2.3.16	Полкодержатель – 16 шт.;
6.2.3.17	Гайка М5+Шайба 5 – 12 шт.;
6.2.3.18	Винт М5х12 – 27 шт.;
6.2.4	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100239, в составе:
6.2.4.1	Стенка задняя – 2 шт.;
6.2.4.2	Полка – 2 шт.;
6.2.4.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
6.2.4.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
6.2.4.5	Короб – 3 шт.;
6.2.4.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.4.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.4.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
6.2.4.9	Саморез 4,2х13 – 30 шт.;
6.2.4.10	Саморез 3х17 – 4 шт.;
6.2.4.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
6.2.4.12	Замок мебельный – 1 шт.;
6.2.4.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
6.2.4.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
6.2.4.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
6.2.4.16	Полкодержатель – 16 шт.;
6.2.4.17	Гайка М5+Шайба 5 – 12 шт.;
6.2.4.18	Винт М5х12 – 27 шт.;
6.2.5	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100240, в составе:
6.2.5.1	Стенка задняя – 1 шт.;
6.2.5.2	Полка – 4 шт.;
6.2.5.3	Дверь – 2 шт.;
6.2.5.4	Короб – 3 шт.;
6.2.5.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.5.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.5.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
6.2.5.8	Шайба 5 – 26 шт.;
6.2.5.9	Саморез 3х17 – 4 шт.;
6.2.5.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
6.2.5.11	Замок мебельный – 2 шт.;

6.2.5.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
6.2.5.13	Полкодержатель – 16 шт.;
6.2.5.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости)
6.2.6	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100241, в составе:
6.2.6.1	Стенка задняя – 1 шт.;
6.2.6.2	Полка – 4 шт.;
6.2.6.3	Дверь – 2 шт.;
6.2.6.4	Короб – 3 шт.;
6.2.6.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.6.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.6.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
6.2.6.8	Шайба 5 – 26 шт.;
6.2.6.9	Саморез 3х17 – 4 шт.;
6.2.6.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
6.2.6.11	Замок мебельный – 2 шт.;
6.2.6.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
6.2.6.13	Полкодержатель – 16 шт.;
6.2.6.14	Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости)
6.2.7	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100242, в составе:
6.2.7.1	Стенка задняя – 1 шт.;
6.2.7.2	Полка – 4 шт.;
6.2.7.3	Дверь – 2 шт.;
6.2.7.4	Короб – 3 шт.;
6.2.7.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.7.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.7.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
6.2.7.8	Шайба 5 – 26 шт.;
6.2.7.9	Саморез 3х17 – 4 шт.;
6.2.7.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
6.2.7.11	Замок мебельный – 2 шт.;
6.2.7.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
6.2.7.13	Полкодержатель – 16 шт.;
6.2.7.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости)
6.2.8	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100243, в составе:
6.2.8.1	Стенка задняя – 1 шт.;
6.2.8.2	Полка – 4 шт.;
6.2.8.3	Дверь – 2 шт.;
6.2.8.4	Короб – 3 шт.;
6.2.8.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.8.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.8.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
6.2.8.8	Шайба 5 – 26 шт.;
6.2.8.9	Саморез 3х17 – 4 шт.;
6.2.8.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
6.2.8.11	Замок мебельный – 2 шт.;
6.2.8.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
6.2.8.13	Полкодержатель – 16 шт.;
6.2.8.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости)

6.2.9	Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100244, в составе:
6.2.9.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.9.2	Полка – 2 шт.;
6.2.9.3	Дверь – 2 шт.;
6.2.9.4	Короб – 3 шт.;
6.2.9.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.9.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
6.2.9.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
6.2.9.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.9.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
6.2.9.10	Гайка М5 – 25 шт.;
6.2.9.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
6.2.9.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
6.2.9.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
6.2.9.14	Замок мебельный – 1 шт.;
6.2.9.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
6.2.9.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
6.2.9.17	Петля для стекла – 4 шт.;
6.2.9.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
6.2.9.19	Полкодержатель – 16 шт.;
6.2.10	Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100245, в составе:
6.2.10.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.10.2	Полка – 2 шт.;
6.2.10.3	Дверь – 2 шт.;
6.2.10.4	Короб – 3 шт.;
6.2.10.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.10.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
6.2.10.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
6.2.10.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.10.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
6.2.10.10	Гайка М5 – 25 шт.;
6.2.10.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
6.2.10.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
6.2.10.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
6.2.10.14	Замок мебельный – 1 шт.;
6.2.10.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
6.2.10.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
6.2.10.17	Петля для стекла – 4 шт.;
6.2.10.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
6.2.10.19	Полкодержатель – 16 шт.;
6.2.11	Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100246, в составе:
6.2.11.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.11.2	Полка – 2 шт.;
6.2.11.3	Дверь – 2 шт.;
6.2.11.4	Короб – 3 шт.;
6.2.11.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.11.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
6.2.11.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
6.2.11.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.11.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
6.2.11.10	Гайка М5 – 25 шт.;

6.2.11.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
6.2.11.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
6.2.11.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
6.2.11.14	Замок мебельный – 1 шт.;
6.2.11.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
6.2.11.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
6.2.11.17	Петля для стекла – 4 шт.;
6.2.11.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
6.2.11.19	Полкодержатель – 16 шт.;
6.2.12	Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100247, в составе:
6.2.12.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.12.2	Полка – 2 шт.;
6.2.12.3	Дверь – 2 шт.;
6.2.12.4	Короб – 3 шт.;
6.2.12.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.12.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
6.2.12.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
6.2.12.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.12.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
6.2.12.10	Гайка М5 – 25 шт.;
6.2.12.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
6.2.12.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
6.2.12.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
6.2.12.14	Замок мебельный – 1 шт.;
6.2.12.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
6.2.12.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
6.2.12.17	Петля для стекла – 4 шт.;
6.2.12.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
6.2.12.19	Полкодержатель – 16 шт.;
6.2.13	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100248, в составе:
6.2.13.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.13.2	Полка – 2 шт.;
6.2.13.3	Дверь – 2 шт.;
6.2.13.4	Короб – 3 шт.;
6.2.13.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.13.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
6.2.13.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
6.2.13.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.13.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
6.2.13.10	Гайка М5 – 25 шт.;
6.2.13.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
6.2.13.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
6.2.13.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
6.2.13.14	Замок мебельный – 1 шт.;
6.2.13.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
6.2.13.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
6.2.13.17	Петля для стекла – 4 шт.;
6.2.13.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
6.2.13.19	Полкодержатель – 16 шт.;
6.2.14	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100249, в составе:

6.2.14.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.14.2	Полка – 2 шт.;
6.2.14.3	Дверь – 2 шт.;
6.2.14.4	Короб – 3 шт.;
6.2.14.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.14.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
6.2.14.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
6.2.14.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.14.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
6.2.14.10	Гайка М5 – 25 шт.;
6.2.14.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
6.2.14.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
6.2.14.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
6.2.14.14	Замок мебельный – 1 шт.;
6.2.14.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
6.2.14.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
6.2.14.17	Петля для стекла – 4 шт.;
6.2.14.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
6.2.14.19	Полкодержатель – 16 шт.;
6.2.15	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100250, в составе:
6.2.15.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.15.2	Полка – 2 шт.;
6.2.15.3	Дверь – 2 шт.;
6.2.15.4	Короб – 3 шт.;
6.2.15.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.15.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
6.2.15.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
6.2.15.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.15.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
6.2.15.10	Гайка М5 – 25 шт.;
6.2.15.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
6.2.15.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
6.2.15.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
6.2.15.14	Замок мебельный – 1 шт.;
6.2.15.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
6.2.15.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
6.2.15.17	Петля для стекла – 4 шт.;
6.2.15.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
6.2.15.19	Полкодержатель – 16 шт.;
6.2.16	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100251, в составе:
6.2.16.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.16.2	Полка – 2 шт.;
6.2.16.3	Дверь – 2 шт.;
6.2.16.4	Короб – 3 шт.;
6.2.16.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
6.2.16.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
6.2.16.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
6.2.16.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
6.2.16.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
6.2.16.10	Гайка М5 – 25 шт.;
6.2.16.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
6.2.16.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;

6.2.16.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
6.2.16.14	Замок мебельный – 1 шт.;
6.2.16.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
6.2.16.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
6.2.16.17	Петля для стекла – 4 шт.;
6.2.16.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
6.2.16.19	Полкодержатель – 16 шт.;
6.3	Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
6.3.1	Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х300х2000 мм, артикул 100255, в составе:
6.3.1.1	Стойка – 4 шт.;
6.3.1.2	Полка – 4 шт.;
6.3.1.3	Подпятник – 4 шт.;
6.3.1.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
6.3.1.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
6.3.1.6	Шайба 5 – 40 шт.;
6.3.1.7	Гайка М5 – 40 шт.
6.3.2	Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х400х2000 мм, артикул 100256, в составе:
6.3.2.1	Стойка – 4 шт.;
6.3.2.2	Полка – 4 шт.;
6.3.2.3	Подпятник – 4 шт.;
6.3.2.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
6.3.2.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
6.3.2.6	Шайба 5 – 40 шт.;
6.3.2.7	Гайка М5 – 40 шт.
6.3.3	Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х500х2000 мм, артикул 100257, в составе:
6.3.3.1	Стойка – 4 шт.;
6.3.3.2	Полка – 4 шт.;
6.3.3.3	Подпятник – 4 шт.;
6.3.3.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
6.3.3.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
6.3.3.6	Шайба 5 – 40 шт.;
6.3.3.7	Гайка М5 – 40 шт.
6.3.4	Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х300х2000 мм, артикул 100258, в составе:
6.3.4.1	Стойка – 4 шт.;
6.3.4.2	Полка – 4 шт.;
6.3.4.3	Подпятник – 5 шт.;
6.3.4.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
6.3.4.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
6.3.4.6	Шайба 5 – 40 шт.;
6.3.4.7	Гайка М5 – 40 шт.
6.3.5	Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х400х2000 мм, артикул 100259, в составе:
6.3.5.1	Стойка – 4 шт.;
6.3.5.2	Полка – 4 шт.;
6.3.5.3	Подпятник – 5 шт.;
6.3.5.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
6.3.5.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
6.3.5.6	Шайба 5 – 40 шт.;
6.3.5.7	Гайка М5 – 40 шт.

6.3.6	Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x300x2000 мм, артикул 100260, в составе:
6.3.6.1	Стойка – 4 шт.;
6.3.6.2	Полка – 4 шт.;
6.3.6.3	Подпятник – 5 шт.;
6.3.6.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
6.3.6.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
6.3.6.6	Шайба 5 – 40 шт.;
6.3.6.7	Гайка М5 – 40 шт.
6.4	Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
6.4	Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
6.4.1	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100118
6.4.2	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100119, в составе:
6.4.2.1	Стенка боковая – 2 шт.;
6.4.2.2	Дно, верх – 2 шт.;
6.4.2.3	Стенка задняя – 1 шт.;
6.4.2.4	Полка – 1 шт.;
6.4.2.5	Дверь – 1 шт.;
6.4.2.6	Стяжка-ТЕ 15 – 8 шт.;
6.4.2.7	Шток – 8 шт.;
6.4.2.8	Шкант 8х30 – 12 шт.;
6.4.2.9	Петля – 2 шт.;
6.4.2.10	Ручка-скоба – 1 шт.;
6.4.2.11	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
6.4.2.12	Заглушка эксцентрик – 8 шт.;
6.4.2.13	Колесо – 4 шт.;
6.4.3	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100120, в составе:
6.4.3.1	Стенка боковая – 2 шт.;
6.4.3.2	Дно, верх – 2 шт.;
6.4.3.3	Стенка задняя – 1 шт.;
6.4.3.4	Полка – 1 шт.;
6.4.3.5	Дверь – 1 шт.;
6.4.3.6	Стяжка-ТЕ 15 – 12 шт.;
6.4.3.7	Шток – 12 шт.;
6.4.3.8	Шкант 8х30 – 16 шт.;
6.4.3.9	Петля – 2 шт.;
6.4.3.10	Ручка-скоба – 2 шт.;
6.4.3.11	Шуруп 2А3-13 – 36 шт.;
6.4.3.12	Заглушка эксцентрик – 12 шт.;
6.4.3.13	Колесо – 4 шт.;
6.4.3.14	Компл.направляющих – 1 шт.;
6.4.4	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100121
6.4.5	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100122
6.4.6	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой № 2, артикул 100123
6.4.7	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100124
6.4.8	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100125
6.4.9	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100126
6.4.10	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками, артикул 100127

6.4.11	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 2, артикул 100128
6.4.12	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой № 2, артикул 100129, в составе:
6.4.12.1	Стенка боковая – 2 шт.;
6.4.12.2	Дно, верх – 2 шт.;
6.4.12.3	Стенка задняя – 1 шт.;
6.4.12.4	Полка – 1 шт.;
6.4.12.5	Дверь – 1 шт.;
6.4.12.6	Стяжка-ТЕ 15 – 8 шт.;
6.4.12.7	Шток – 8 шт.;
6.4.12.8	Шкант 8x30 – 8 шт.;
6.4.12.9	Петля – 2 шт.;
6.4.12.10	Ручка-скоба – 1 шт.;
6.4.12.11	Шуруп 2А3-13 – 26 шт.;
6.4.12.12	Заглушка эксцентрик – 8 шт.;
6.4.12.13	Колесо – 4 шт.;
6.4.12.14	Полкодержатель – 4 шт.;
6.4.13	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 3, артикул 100130, в составе:
6.4.13.1	Стенка боковая – 2 шт.;
6.4.13.2	Дно, верх – 2 шт.;
6.4.13.3	Стенка задняя – 1 шт.;
6.4.13.4	Ящик – 3 шт.;
6.4.13.5	Стяжка-ТЕ 15 – 20 шт.;
6.4.13.6	Шток – 20 шт.;
6.4.13.7	Шкант 8x30 – 32 шт.;
6.4.13.8	Ручка-скоба – 3 шт.;
6.4.13.9	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
6.4.13.10	Заглушка эксцентрик – 20 шт.;
6.4.13.11	Колесо – 4 шт.;
6.4.13.12	Компл.направляющих – 3 шт.;
6.5	Руководство по эксплуатации – 1 шт.

2. Показания для применения медицинского изделия.

Стол врача предназначен для проведения терапевтических процедур предназначен для размещения и хранения расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Тумба медицинская подкатная предназначена для размещения, хранения и перемещения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур различных изделий медицинского и лабораторного назначения и медикаментов.

Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком предназначена для размещения, хранения и перемещения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур

Тумба медицинская под аппаратуру предназначена для размещения и хранения медицинского и лабораторного оборудования.

Стол медицинский подкатной предназначен для размещения, хранения и перемещения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Стол медицинский предназначен для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Стол медицинский инструментальный предназначен для размещения и хранения инструментов, медикаментов, приспособлений, используемых при проведении процедур.

Шкаф медицинский и шкаф медицинский навесной предназначен для организации хранения различных изделий медицинского и лабораторного назначения и медикаментов.

Шкаф для медикаментов предназначен для размещения и хранения медикаментов и приспособлений к ним, используемых при проведении процедур.

Шкаф-стеллаж медицинский предназначен для хранения медицинских расходных материалов.

Кушетка медицинская смотровая предназначена для размещения пациентов при осмотре и проведении процедур в медицинских кабинетах.

Ширма медицинская стационарная и ширма медицинская передвижная предназначены для организации защищенного от посторонних взглядов пространства при проведении осмотра пациентов в медицинских кабинетах.

3. Противопоказания для применения медицинского изделия.

- Не использовать изделие не по назначению.
- При эксплуатации изделия не допускается превышать допустимые нагрузки.
- Запрещается пользоваться сломанным изделием или изделием после истечения его срока службы.

4. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно данного руководства - побочные действия отсутствуют.

5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на упаковке.
- Не проводите по поверхности и не ударяйте их острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери и полки необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденную стеклодеталь;
- Во избежание опрокидывания мебели запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно;
- При базировании изделия на полу должна быть обеспечена его устойчивость от опрокидывания, перекосов, раскачивания не допускается.

6. Технические характеристики медицинского изделия.

Габаритные размеры, масса изделий и конструктивные особенности соответствуют, приведенным в Приложении 1.

Двери открываются и закрываются плавно, без заедания и перекосов с усилием не более 10Н (1 кгс).

Ящики установлены на роликовых или шариковых направляющих и имеют устройство, предотвращающее их выпадение при выдвижении. Ящики выдвигаются плавно, без перекосов и заедания с усилием не более 10 (1 кгс).

Замки дверей и ящиков неподвижно и прочно закреплены и установлены так, что обеспечивает их легкое отпирание и запирание, а также плотное прилегание дверей и ящиков к корпусу.

Двери без замков имеют устройство, предотвращающее их самопроизвольное открывание.

Набор, в зависимости от модификации, установлен на колеса, либо регулируемые, либо нерегулируемые опоры.

Усилие включения тормоза колес не превышает 150 Н (15 кгс).

Усилие трогания с места не более, указанного в таблице 2.

Изделия при заторможенных колесных опорах с размещенной на них предельной рабочей нагрузкой не смещаются при приложении усилия, указанного в таблице 1.

Таблица 1.

Масса изделия (см. Приложение 1)	Усилие трогания, не более, Н (кгс)	Усилие смещения при заторможенных колёсных опорах, не менее, Н (кгс)
Менее 50 кг	60 (6)	115 (11.5)
50-100 кг	125 (12.5)	235 (23.5)

Усилие перемещения Набора на колесах по горизонтальному бесшовному полу без нагрузки не превышает 50Н (5 кгс).

Набор стоит устойчиво на ровной горизонтальной поверхности пола, при этом зазор между полом и одной из опор не превышает 3 мм.

Элементы Набора выдерживают полуторакратную равномерно распределенную нагрузку.

Величины нагрузок:

- на столешницу, полку тумбы из ЛДСП, МДФ не более 10 кг, на тумбу не более 25 кг;
- на столешницу, полку тумбы металлические не более 15 кг;
- на дно ящика из ЛДСП не более 5 кг;
- на дно ящика металлическое не более 10 кг;
- на полку тумбы, дно ящика не более 10 кг;
- на полку шкафа из ЛДСП не более 15 кг;
- на полку шкафа из стекла не более 5 кг;
- на полку шкафа металлическую не более 15 кг;
- на столешницу столов медицинских для врача, столов медицинских и столов медицинской сестры не более 80 кг;
- на столешницу столов медицинских инструментальных не более 100 кг, на полку не более 50 кг;
- на ступеньки поставки не более 85 кг;
- на полку шкафа-стеллажа металлическую не более 100 кг, а на секцию не более 400 кг.
- кушетка должна выдерживать предельную рабочую нагрузку не менее 130 кг.

Влажность деталей из древесных материалов (8±2) %.

Толщина полок из стекла соответствует ГОСТ 16371.

Гидравлическая система и пневмопривод герметичны. Не допускается наличие подтеков рабочей жидкости.

Самопроизвольное опускание элементов изделий с гидравлической системой/пневмоприводом не допускается.

Усилие, прикладываемое к педали гидропривода не превышает 250 Н (25 кгс).

Усилие, прикладываемое к рукоятке пневмопружины не превышает 10 Н (1 кгс).

Поверхность Набора не имеет трещин, вмятин, следов коррозии, острых кромок, заусенцев, клеевых пятен, подтеков, разнооттеночности и других дефектов, ухудшающих ее товарный вид. Мягкая поверхность изделия не имеет морщин, складок, разрывов материала. Мягкая поверхность изделия не должна иметь морщин, складок, разрывов материала. Покрытия металлических деталей должны быть однотонными, без кратеров, пузырей, включений, отслаивания пленки и должны соответствовать требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

Металлические и неметаллические неорганические покрытия однотонные, без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и соответствуют требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I.

Лакокрасочные покрытия соответствуют ГОСТ 9.032 для условий эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104. Наружные поверхности имеют покрытия не ниже IV класса, внутренние — не ниже VI.

Наружные поверхности оборудования устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113, 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 или 1%-ным раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

При изготовлении Набора используются следующие материалы:

Тумба медицинская подкатная изготавливается из следующих материалов:

- каркас: стальная труба по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия; корпус, дверь и ящик: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Ручки на двери и ящика: металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. (100118).

- каркас, ящик, дверь, полка из влагостойкой ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) белого цвета по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surtesco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. Ручки на двери и ящика: металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. (100119, 100120, 100129, 100130);

- каркас: алюминиевый профиль, производства ООО «Алюмторг». Верх, низ и фасад - МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) белого цвета по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Задняя и боковые стенки: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surtesco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. Ручки на двери и ящика: металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. (100121, 100122, 100123, 100124, 100125, 100126, 100127, 100128).

Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, в зависимости от модификации изготавливается из следующих материалов:

- корпус тумбы и столешница из влагостойкой ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. Ручки на двери и ящиках (при наличии): металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Поворотный столик: каркас прямоугольный стальной профиль по ГОСТ 13663-86 производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия (**100135, 100136**);

- корпус тумбы изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. Поворотный столик: каркас прямоугольный стальной профиль по ГОСТ 13663-86 производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия, столешница МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) белого цвета по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия (**100137, 100138**).

Тумба медицинская под аппаратуру (100139) изготавливается из следующих материалов: корпус, двери, полки: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) белого цвета по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Ручки на дверях: стальные, модель UP, производства «GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED», Китай. Нерегулируемые стальные опоры, производства ООО «ФМС», Россия.

Стол врача для проведения терапевтических процедур, в зависимости от модификации изготавливается из следующих материалов:

- каркас: алюминиевый профиль производства ООО «Алюмторг». Корпус: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия (**100140, 100141**);

- каркас: алюминиевый профиль производства ООО «Алюмторг». Корпус: из влагостойкой ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Ручка на двери / ящиках: металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай (**100142, 100143, 100144, 100146, 100148**);

- каркас: алюминиевый профиль производства ООО «Алюмторг». Боковые стенки из влагостойкой ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Столешница МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Окантовка

торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия (100145, 100147);

- каркас: алюминиевый профиль производства ООО «Алюмторг». Столешница и фасад - МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида Е1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Боковые стенки: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Ручка на двери: металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED". Китай (100149, 100150, 100151, 100152, 100153).

Стол медицинский подкатной, в зависимости от модификации изготавливается из следующих материалов:

- каркас: стальной профиль квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Столешница: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Кромочная лента: ПВХ серого цвета толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия (100164, 100165);

- каркас: стальной профиль квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО «Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Столешница: полиэтилен низкого давления, производства ОАО «Казаньоргсинтез», Россия (ТУ 2243-188-00203335-2009). Телескопическое устройство из пластика и стали, производства ООО «ФМС», Россия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия (100166);

- каркас: стальной профиль квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Столешница: МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида Е1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Кромочная лента: ПВХ серого цвета толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия (100167).

Стол медицинский изготавливается из следующих материалов: каркас: стальной профиль квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Столешница: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Кромочная лента: ПВХ серого цвета толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия (100168, 100169, 100170, 100171).

Стол медицинский инструментальный изготавливается из: каркас / ящик / дверь / полка: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Цвет фасадов может быть другим: бирюзовый (RAL 6027), голубой (RAL 5024). Столешница с бортиками: формованный листовой АБС-пластик по ГОСТ Р56404-2015, производства ООО «Промполимер», Россия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. Опора колесная подшипниковая с пятой, арт.8000701, Ø100 мм. Ручки на ящике и двери: металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Резьбовые заклепки стальные, производства ООО «Управляющая компания «Фиксит», Россия (ТУ 1680-001-30391216-2011) (**100173, 100174, 100175, 100176, 100177, 100178, 100179, 100180**).

Шкаф медицинский в зависимости от модификации изготавливается из:

- корпус / полки: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг». Дверь / фасад: МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Кромочная лента: ПВХ толщиной 2 мм серого цвета, производства Surteco GmbH, Германия. Петли стальные с доводчиком производства ООО «ФМС», Россия. Ручка на дверь модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Регулируемые опоры со штырем M10, материал сталь и пластик, производства ООО «ФМС», Россия (**100219, 100220**);

- корпус: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) мм по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг». Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Полки и фасад нижнего отделения: МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Ручки на дверях: модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Петли с доводчиком производства ООО «ФМС», материал сталь, пластик, Россия. Регулируемые опоры со штырем M10, материал сталь и пластик, производства ООО «ФМС», Россия (**100233**);

- корпус: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг». Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Нижний фасад: МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Ручки на дверях: модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Петли с доводчиком производства ООО «ФМС», материал сталь, пластик, Россия. Регулируемые опоры со штырем M10, материал сталь и пластик, производства ООО «ФМС», Россия. Верхняя дверь: закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014, производства ООО «Производственная база «Август», Россия (**100234**);

- корпус и полки: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) мм серого цвета по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Фасады (двери нижние): МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1,

облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) серого цвета по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Кромочная лента: ПВХ толщиной 2 мм серого цвета, производства Surteco GmbH, Германия. Петли с доводчиком (для дверей из МДФ): материал – сталь, пластик, производства ООО «ФМС», Россия. Двери верхние: закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014, производства ООО «Производственная база «Август», Россия. Алюминиевый профиль, производства ООО «Алюмторг», Россия. Петли с доводчиком (для дверей из стекла): сталь, производства ООО «ФМС», Россия. Ручки на дверях: модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Регулируемые опоры со штырем M10, материал сталь и пластик, производства ООО «ФМС», Россия (100235).

Шкаф медицинский навесной, в зависимости от модификации изготавливается из:

- каркас: алюминиевый профиль производства ООО «Алюмторг», Россия. Корпус и полка: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг». Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Петли стальные производства ООО «ФМС», Россия. Ручки на дверях: стальные, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай (100221, 100223);

- каркас: алюминиевый профиль, производства ООО «Алюмторг», Россия. Корпус: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) белого цвета по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Дверь и полка: закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014, производства ООО «Производственная база «Август», Россия. Ручки на дверях: стальные, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай (100222, 100224).

Шкаф для медикаментов, в зависимости от модификации изготавливается из:

- каркас, двери и полки: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех». Верхняя секция и полки: закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014, производства ООО «Производственная база «Август», Россия. Ручки на дверях модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Петли с доводчиком (для стекла): стальные, производства ООО «ФМС», Россия. Металлические пластинчатые полкодержатели, производства ООО «ФМС», Россия. Опоры: из стали и пластика, производства ООО «ФМС», Россия (100236, 100237, 100238, 100239, 100244, 100245, 100246, 100247);

- каркас, двери и полки: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех». Металлические пластинчатые полкодержатели, производства ООО «ФМС», Россия. Опоры: из стали и пластика, производства ООО «ФМС», Россия (100240, 100241, 100242, 100243, 100248, 100251, 100249, 100250).

Шкаф-стеллаж медицинский изготавливается из следующих материалов: каркас и полки: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех». Россия. Опоры: материал пластик и сталь производства ООО «ФМС» (100255, 100256, 100257, 100258, 100259, 100260).

Кушетка медицинская смотровая в зависимости от модификации изготавливается из следующих материалов:

- каркас (усиленный): прямоугольный стальной профиль по ГОСТ 13663-86 производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Ложе: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО

Предприятие «Уралинтех», Россия. Обивка: эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020). Чехол из винилискожи белого цвета, производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай. Регулировка наклона подголовника — механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100265):

- каркас (усиленный): стальной профиль по ГОСТ 8639-82, ГОСТ 30245-2003, производства ООО «Феррум», Россия. Ножки: стальная опора Ø51 с приварным фланцем в сборе, производства ООО «ФМС», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Подголовник и ложе: фанера, производства ООО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», Россия; эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020); чехол из винилискожи бежевого цвета производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай. Механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100266).

Ширма медицинская стационарная изготавливается из следующих материалов: каркас: стальная труба по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия; усиление труба стальная квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО Выксунский металлургический завод, Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Полотно секций: пленка ПВХ, производства ООО «Трасса-С», Россия (ТУ 22.21.30-002-48184618-2022). Заглушки полипропиленовые, производства ООО «ФМС», Россия (100284, 100285, 100286, 100287, 100288, 100289).

Ширма медицинская передвижная изготавливается из следующих материалов: каркас: стальная труба круглого сечения по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия; усиление труба стальная квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Полотно секций: пленка ПВХ, производства ООО «Трасса-С», Россия (ТУ 22.21.30-002-48184618-2022). Заглушки полипропиленовые, производства ООО «ФМС», Россия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия диаметр 75 (100290, 100291, 100292, 100293, 100294, 100295).

7. Комплектность медицинского изделия.

Комплект поставки набора должен соответствовать указанному в Таблице 2 и Приложении 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Набор мебели медицинской (в вариантах исполнения) *	1
2	Руководство по эксплуатации	1

* количество необходимых изделий входящих в состав набора и их модификации (арткулы), определяются по согласованию с заказчиком при заказе.

8. Подготовка к работе медицинского изделия.

Работу проводить только после изучения указаний, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной таре в нормальных климатических условиях (от +10°C до +35°C) не менее 2 ч.

Полученное изделие распакуйте, произведите внешний осмотр. Проверьте целостность покрытий и комплектацию. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате

неправильной транспортировки или хранения, ввод в эксплуатацию без согласования с предприятием-изготовителем не допускается.

Необходимо ознакомиться с устройством изделия и порядком сборки (для сборно-разборных изделий).

Произвести дезинфекцию изделия средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

9. Инструкция по сборке

100118, 100121, 100122, 100123, 100124, 100125, 100126, 100127, 100128, 100221, 100222, 100223, 100224 поставляются в собранном виде. Внешний вид приведен в Приложении 3.

Для сборно-разборных:

1. Распаковать изделие и проверить целостность покрытия.
2. Проверить комплектность крепежа (Приложение 2)
3. Осуществить сборку согласно руководству (Приложение 3).
4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

10. Техническое обслуживание медицинского изделия.

Изделия имеют простую, надежную конструкцию и не требуют специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости проверка и регулировка резьбовых соединений, петель и покрытий.

В случае ослабления резьбовых соединений и петель, необходимо их затянуть. Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять надежность крепления колес. При необходимости производить затяжку крепежа.

Не рекомендуется длительное использование изделия вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, а также под воздействием прямых солнечных лучей.

В течение всего срока пользования изделием обязательно производите периодическую дезинфекцию, сроки очередной дезинфекции согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

11. Маркировка медицинского изделия.

Маркировка изделий содержит:

- наименование, юридический адрес предприятия-изготовителя;
- адрес места производства;
- товарный знак (логотип) предприятия-изготовителя (при наличии);
- общее наименование изделия;
- наименование элемента набора;
- артикул;
- серийный номер;
- дата производства;
- гарантийный срок;
- срок службы;
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения;
- обозначение настоящих технических условий;
- символ «Предел температуры»;
- символ «Диапазон влажности».

12. Упаковка медицинского изделия.

Упаковка изделий обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Изделия упакованы в гофрокартон по ГОСТ Р 52901. Дополнительно допускается упаковка изделий в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

Эксплуатационная документация упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена вместе с изделием.

Съемная фурнитура упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена вместе с изделием.

Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании заперты на замок или при отсутствии замков, закреплены средствами, исключающими повреждение мебели.

13. Транспортирование и хранение медицинского изделия.

Набор транспортируется железнодорожными, водным, автомобильным и воздушным транспортом. Вид транспортного средства - крытый в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования - 5 ОЖ4 по ГОСТ 15150: при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Условия хранения Набора на складах в упаковке предприятия-изготовителя - 1Л по ГОСТ 15150: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 80%. Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред.

14. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие Набора требованиям ТУ 32.50.30-001-0184166233-2622 при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и выполнения требований Руководства по эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным покупателем.

Срок службы 8 лет с момента ввода в эксплуатацию. За предельное состояние принимается такое состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация не допустима по условиям безопасности или нецелесообразна по технико-экономическим или функциональным показателям.

15. Порядок осуществления утилизации медицинского изделия.

Специальных требований по утилизации оборудования не предъявляется.

Изделия, не поступившие в эксплуатацию, по истечении срока хранения подлежат вторичной переработке, либо подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованиями санитарных правил Российской Федерации. Изделия после эксплуатации подлежат утилизации (уничтожению), согласно требованиям СанПиН 2.1.3684, как отходы класса А, а также в соответствии с инструкциями действующими в лечебном-профилактическом учреждении.

16. Сведения о производителе медицинского изделия.

ИП Костров Александр Анатольевич

Юридический адрес: 427105, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, с. Люкшудья, ул. Лесная, д. 4

Адрес места производства: 426006, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, 135

Тел.: 8-800-700-01-89; E-mail: infoRY@fm18.ru.

17. Изделия соответствуют требованиям национальных стандартов:

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность»;

ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2 Требования к обращению с животными»

ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5 Исследование на цитотоксичность: методы in vitro»;

ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

ГОСТ ISO 10993-12-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12 Приготовление проб и контрольные образцы».

ГОСТ ISO 10993-23-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 23. Исследования раздражающего действия».

Перечень модификаций мебели, габаритные и основные размеры, масса изделий и конструктивные особенности

1. Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой	100118	440х450х850	20	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой. на колесах
Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой	100119	430х450х660	20	С верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, на колесах
Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой	100120	430х450х660	20	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой. на колесах
Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой	100121	430х430х660	20	С верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой. на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП
Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой	100122	430х430х660	20	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой. на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП
Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой № 2	100123	430х430х660	20	С верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой. на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП и МДФ
Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой	100124	430х430х660	20	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП и МДФ
Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой	100125	430х430х660	20	С одним отделением с дверкой и полкой, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП
Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой	100126	430х430х660	20	С одним отделением с дверкой и полкой, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП и МДФ

Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками	100127	430x430x660	25	С тремя выдвижными ящиками, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП
Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 2	100128	430x430x660	25	С тремя выдвижными ящиками, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП и МДФ
Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой № 2	100129	430x450x660	20	С одним отделением с дверкой и полкой, на колесах
Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 3	100130	430x450x660	30	С тремя выдвижными ящиками, на колесах

2. Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, нишей и дверцей	100135	580x450x790-1205	25	С верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, с поворотным столиком*, на колесах
Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, выдвижным ящиком и дверцей	100136	580x450x790-1205	25	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, с поворотным столиком*, на колесах
Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, нишей и дверцей №2	100137	580x450x790-1205	25	С верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, с поворотным столиком* из МДФ, на колесах
Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, выдвижным ящиком и дверцей №2	100138	580x450x790-1205	25	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, с поворотным столиком* из МДФ, на колесах

* Столик поворачивается на 360 градусов

3. Тумба медицинская под аппаратуру:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Тумба медицинская под аппаратуру	100139	700X600X850	35	Двустворчатая, с двумя полками

4. Стол врача для проведения терапевтических процедур. в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Стол врача для проведения терапевтических процедур 1200х600х750 мм	100140	1200х600х750	22	Без тумб, регулируемые опоры, каркасный с заполнением ЛДСП
Стол врача для проведения терапевтических процедур 1400х600х750 мм	100141	1400х600х750	40	Без тумб, регулируемые опоры, каркасный с заполнением ЛДСП
Стол врача для проведения терапевтических процедур с тумбой 1200х600х750 мм	100142	1200х600х750	35	Однотумбовый с дверкой, регулируемые опоры, каркасный с заполнением ЛДСП
Стол врача для проведения терапевтических процедур с тумбой 1400х600х750 мм	100143	1400х600х750	40	Однотумбовый с дверкой, регулируемые опоры, каркасный с заполнением ЛДСП
Стол врача для проведения терапевтических процедур с тремя ящиками	100144	1200х600х750	40	Однотумбовый с тремя ящиками, регулируемые опоры, каркасный с заполнением ЛДСП
Стол врача для проведения терапевтических процедур 1200х600х750 мм № 2	100145	1200х600х750	22	Без тумб, регулируемые опоры, каркасный с заполнением ЛДСП и МДФ
Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с тремя ящиками	100146	1400х600х750	45	Однотумбовый с тремя ящиками, регулируемые опоры, каркасный с заполнением ЛДСП
Стол врача для проведения терапевтических процедур 1400х700х750 мм	100147	1400х700х750	30	Без тумб, регулируемые опоры, каркасный с заполнением ЛДСП и МДФ
Стол врача для проведения терапевтических процедур двутумбовый с тремя ящиками и тумбой	100148	1400х700х750	60	Двутумбовый, с тремя ящиками в одной и с дверкой в другой, регулируемые опоры, каркасный с заполнением ЛДСП
Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с дверцей	100149	1200х600х750	40	Однотумбовый с дверкой, регулируемые опоры, каркасный с заполнением ЛДСП и МДФ
Стол врача для проведения терапевтических процедур со встроенной тумбой с дверцей	100150	1400х700х750	35	Стол имеет встроенную тумбу с дверью.

Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с тремя ящиками 1200х600х750 мм	100151	1200х600х750	40	Однотумбовый с тремя ящиками, регулируемые опоры, каркасный с заполнением ЛДСП и МДФ
Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с тремя ящиками 1400х700х750 мм	100152	1400х700х750	55	Однотумбовый с тремя ящиками, регулируемые опоры, каркасный с заполнением ЛДСП и МДФ
Стол врача для проведения терапевтических процедур двутумбовый, с тремя ящиками в одной и с дверкой в другой	100153	1400х600х750	60	Двутумбовый, с тремя ящиками в одной и с дверкой в другой, регулируемые опоры, каркасный с заполнением ЛДСП и МДФ

5. Стол медицинский подкатной, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты	100164	750х400х800-1270	14	с регулировкой высоты, на колесах, облегченный
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №2	100165	750х400х800-1270	15	с регулировкой высоты, на колесах
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №3	100166	750х400х800-1270	15	с регулировкой высоты, на колесах, со столешницей из полиэтилена
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №4	100167	750х400х800-1270	15	С регулировкой высоты, на колесах, со Столешницей из МДФ

6. Стол медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Стол медицинский 850х750х750 мм	100168	850х750х750	20	Четыре ножки, столешница из ЛДСП
Стол медицинский 1000х750х750 мм	100169	1000х750х750	25	Четыре ножки, столешница из ЛДСП
Стол медицинский 850х750х750 мм №2	100170	850х750х750	20	Четыре ножки, столешница из МДФ
Стол медицинский 1000х750х750 мм №2	100171	1000х750х750	25	Четыре ножки, столешница из МДФ

7. Стол медицинский инструментальный, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Стол медицинский инструментальный с нишей и дверкой	100173	510х615х930	55	Комплектация: дверь и ниша, колеса поворотные, самоориентирующиеся (два колеса с индивидуальным тормозом)
Стол медицинский инструментальный с выдвижным ящиком и дверкой	100174	510х615х930	55	Комплектация: с выдвижным ящиком и дверкой, колеса поворотные, самоориентирующиеся (два колеса с индивидуальным тормозом)
Стол медицинский инструментальный с тремя выдвижными ящиками	100175	510х615х930	55	Комплектация: с тремя выдвижными ящиками, колеса поворотные, самоориентирующиеся (два колеса с индивидуальным тормозом)
Стол медицинский инструментальный с двумя нишами и дверками, артикул 100176	100176	950х615х930	75	Комплектация: с двумя нишами и двумя дверками, колеса поворотные, самоориентирующиеся (два колеса с индивидуальным тормозом)
Стол медицинский инструментальный широкий с двумя выдвижными ящиками и нишей	100177	950х615х930	75	Комплектация: комплектация: дверь и ниша, колеса поворотные, самоориентирующиеся (два колеса с индивидуальным тормозом)
Стол медицинский инструментальный широкий с тремя выдвижными ящиками	100178	950х615х930	75	Комплектация: с тремя выдвижными ящиками, колеса поворотные, самоориентирующиеся (два колеса с индивидуальным тормозом)
Стол медицинский инструментальный с двумя выдвижными ящиками и дверками	100179	950х615х930	75	Комплектация: с двумя выдвижными ящиками и двумя дверками, колеса поворотные, самоориентирующиеся (два колеса с индивидуальным тормозом)
Стол медицинский инструментальный с четырьмя выдвижными ящиками и дверкой	100180	950х615х930	75	Комплектация: с четырьмя выдвижными ящиками и дверкой, колеса поворотные, самоориентирующиеся (два колеса с индивидуальным тормозом)

8. Шкаф медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Шкаф медицинский с двумя дверьми и пятью полками, с регулируемыми опорами	100219	860x460x1950	75	Односекционный, двухстворчатый, с пятью полками, на опорах
Шкаф медицинский двухстворчатый, с двумя вертикальными отделениями, с регулируемыми опорами	100220	860x460x1950	80	Двухстворчатый, с двумя вертикальными отделениями, с полкой и перекладиной в первом отделении, с пятью полками во втором отделении, на опорах
Шкаф медицинский одностворчатый с открытой секцией	100233	450x460x1950	35	Двухсекционный, одностворчатый, с двумя открытыми полками в верхней секции, одной полкой в нижней секции, на опорах
Шкаф медицинский одностворчатый с двумя дверцами	100234	450x460x1950	35	Двухсекционный, одностворчатый, с двумя полками в верхней секции, с одной полкой в нижней секции, на опорах
Шкаф медицинский двухсекционный, двухстворчатый с четырьмя дверцами	100235	860x460x1950	74	Двухсекционный, двухстворчатый, с двумя полками в верхней секции, одной полкой в нижней секции, на опорах

9. Шкаф медицинский навесной, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Шкаф медицинский навесной двухстворчатый	100221	860x380x450	20	Навесной, двухстворчатый, с полкой, каркасный с заполнением ЛДСП
Шкаф медицинский навесной двухстворчатый остекленный	100222	860x380x450	20	Навесной, двухстворчатый остекленный, с полкой, каркасный с заполнением ЛДСП
Шкаф медицинский навесной двухстворчатый с полкой	100223	860x380x450	20	Навесной, двухстворчатый, с полкой

Шкаф медицинский навесной двухстворчатый остекленный с полкой	100224	860x380x450	20	Навесной, двухстворчатый остекленный, с полкой
---	--------	-------------	----	---

10. Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией	100236	570x320x1655	32	Двухсекционный, одностворчатый, со стеклянными полками и стеклянной дверкой в верхней секции. металлическими полками и дверкой в нижней секции
Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией №2	100237	570x320x1655	38	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из стекла Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный	100238	600x400x1750	38	Одна открытая секция, вторая закрытая. Количество полок 4 Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из стекла. Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2	100239	600x400x1750	45	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из стекла. Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с	100240	570x320x1655	27	двухсекционный, одностворчатый, с

металлическими полками и дверками				металлическими полками и дверками в секциях
Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками №2	100241	570x320x1655	36	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из металла Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный	100242	600x400x1750	31	Две закрытые секции. Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из металла. Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2	100243	600x400x1750	41	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из металла. Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией	100244	700x320x1655	38	Двухсекционный, двухстворчатый, со стеклянными полками и стеклянными дверками в верхней секции, металлическими полками и дверками в нижней секции
Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией №2	100245	700x320x1655	45	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный Количество створок двухстворчатый. Верхняя секция две дверки и две полки из стекла Нижняя секция две дверки и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный	100246	800x400x1750	45	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двухстворчатый

Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией. углубленный №2	100247	800x400x1750	56	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двустворчатый
Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками	100248	700x320x1655	41	двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками в секциях
Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками №2	100249	700x320x1655	43	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный Количество створок двустворчатый
Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный	100250	800x400x1750	38	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двустворчатый
Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2	100251	800x400x1750	54	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двустворчатый

Шкафы должны иметь у основания 4 регулируемые опоры, обеспечивающие устойчивое положение шкафа на поверхности пола.

11. Шкаф-стеллаж медицинский. в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x300x2000 мм	100255	1000x300x2000	25	Четыре полки
Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x400x2000 мм	100256	1000x400x2000	30	Четыре полки
Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x500x2000 мм	100257	1000x500x2000	35	Четыре полки
Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x300x2000 мм	100258	1000x300x2000	25	Пять полок
Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x400x2000 мм	100259	1000x400x2000	30	Пять полок
Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x300x2000 мм	100260	1000x500x2000	35	Пять полок

12. Кушетка медицинская смотровая. в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
--------------	---------	---	---------------------------	-------------------------------

Кушетка медицинская смотровая бесступенчатая	100265	1950x650x520	30	Угол наклона подголовника: от 0° до 45°. бесступенчатый
Кушетка медицинская смотровая со ступенчатым подголовником	100266	1970x665x550	30	Угол наклона подголовника: от 0° до 45°. механизмами Растомат

13. Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Ширма медицинская стационарная, 1 секция	100284	790x400x1650	4 – одной секции	Без колес, 1 секция
Ширма медицинская стационарная, 2 секции	100285	790x400x1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес, 2 секции
Ширма медицинская стационарная, 3 секции	100286	790x400x1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес, 3 секции
Ширма медицинская стационарная, 1 секция, на плоских ножках	100287	800x400x1720	4 – одной секции	Без колес, 1 секция.
Ширма медицинская стационарная, 2 секции, на плоских ножках	100288	800x400x1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес, 2 секции.
Ширма медицинская стационарная, 3 секции, на плоских ножках	100289	800x400x1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес, 3 секции.

14. Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Ширма медицинская передвижная, 1 секция	100290	790x400x1650	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 1 секция
Ширма медицинская передвижная, 2 секции	100291	790x400x1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 2 секции
Ширма медицинская передвижная, 3 секции	100292	790x400x1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 3 секции
Ширма медицинская передвижная, 1 секция, на плоских ножках	100293	800x400x1720	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 1 секция.

Ширма медицинская передвижная, 2 секции, на плоских ножках	100294	800x400x1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 2 секции.
Ширма медицинская передвижная, 3 секции, на плоских ножках	100295	800x400x1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 3 секции.

Комплектность крепежа изделий

1. Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100119	100120	100129	100130
Стенка боковая	2	2	2	2
Дно, верх	2	2	2	2
Стенка задняя	1	1	1	1
Полка	1	1	1	-
Дверь	1	1	1	-
Ящик	-	-	-	3
Стяжка-ТЕ 15	8	12	8	20
Шток	8	12	8	20
Шкант 8х30	12	16	8	32
Петля	2	2	2	-
Ручка-скоба	1	2	1	3
Шуруп 2А3-13	24	36	26	42
Заглушка эксцентрик	8	12	8	20
Колесо	4	4	4	4
Компл.направляющих	-	1	-	3
Полкодержатель	-	-	4	-
Конфирмат	-	-	-	-
Ключ шестигранный	-	-	-	-
Заглушка конфирмат	-	-	-	-

2. Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100135	100136	100137	100138
Основание	1	1	1	1
Тумба	1	1	1	1
Столешница	1	1	1	1
Стойка	1	1	1	1
Винт М6х45	2	2	2	2
Гайка М6	2	2	2	2
Шайба 6	2	2	2	2
Шуруп 5х35	6	6	6	6
Саморез 4.2х19	2	2	2	2
Колесо мебельное	4	4	4	4

3. Тумба медицинская под аппаратуру:

Наименование	Количество, шт.
	100139
Боковая стенка	2
Задняя стенка	1
Порог	1
Дно, верх	2
Полка	2
Дверь	2
Стяжка- ТЕ 15	4
Шток	4
Конфирмат	4
Ключ шестигранный	1
Шкант 8х30	12
Петля	4
Ручка-скоба	2
Шуруп 2А3-13	30
Подпятник	4
Полкодержатель	8
Заглушка эксцентрик	4
Заглушка конфирмат	4
Профиль стыковочный	1

4. Стол врача для проведения терапевтических процедур, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.						
	100140; 100145	100141; 100147	100142; 100149	100143; 100150	100144; 100151	100146; 100152	100148; 100153
Боковая стенка	2	2	2	2	2	2	2
Задняя стенка	1	1	1	1	1	1	1
Столешница	1	1	1	1	1	1	1
Перемышка	1	1	-	- / 1	- / 1	- / 1	- / 1
Дверка	-	-	1	1	-	-	1
Полка	-	-	1	1	-	-	1
Ручка	-	-	1	1	3	3	3
Ящик	-	-	-	-	3	3	3
Ключ шестигранный	1	1	1	1	1	1	1
Г'уруп 2А3-13	20	24	20	24	64	68	68
Опора регулируемая	4	4	6	6	6	6	8
Уголок крепежный	10	12	10	12	10	12	12
Полкодержатель	-	-	4	4	-	-	4

5. Стол медицинский подкатной, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100164	100165	100166	100167
Основание столика	1	1	1	1
Вертикальная направляющая	1	1	1	1
Стойка столешницы	1	1	1	1

Столешница	1	1	1	1
Винт М6 х 45	5	5	5	5
Гайка М6	5	5	5	5
Шайба 6	5	5	5	5
Шуруп 5 X 15	8	8	-	8
Винт М10х25	-	4	4	4
Рукоятка	1	1	1	1
Шайба пружинная 10	-	4	4	4
Колесо	4	4	4	4

6. Стол медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100168	100169	100170	100171
Каркас- столешница	1	1	1	1
Ножка	4	4	4	4
Перемычка	1	1	1	1
Гайка М10	4	4	4	4
Шайба пружинная 10	4	4	4	4

7. Стол медицинский инструментальный, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.							
	100173	100174	100175	100176	100177	100178	100179	100180
Основание	1	1	1	1	1	1	1	1
Заклепка М6 резьбовая	38	52	79	54	65	79	80	107
Винт 6х10 мм	42	56	83	58	69	83	86	116
Футорка М6	4	4	4	4	4	4	6	6
Боковина	2	2	2	3	2	2	3	3
Замок мебельный	1	1	1	2	-	1	2	1
Ручка врезная	1	2	3	2	2	3	4	5
Опора колесная 100 мм	4	4	4	4	4	4	4	4
Карточная петля	2	2	-	4	-	-	4	2
Столешница	1	1	1	1	1	1	1	1
Направляющая роликовая	-	-	6	-	4	6	-	8

8. Шкаф медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.				
	100219	100220	100233	100234	100235
Боковая стенка	2	2	2	2	2
Задняя стенка	1	1	1	1	1
Дно, верх	2	2	2	2	2
Полка	5	6	4	2	2
Полка стеклянная	-	-	-	2	2
Дверь	2	2	1	2	4
Штанга	-	1	-	-	-
Перегородка (стойка)	-	1	-	-	-
Конфирмат	16	20	12	12	12
Ключ шестигранный	1	1	1	1	1
Шкант 8х30	16	20	12	12	12
Петля	6	6	2	2	4

Петля с доводчиком	-	-	-	2	2
Ручка-скоба	2	2	-	-	2
Ручка-скоба большая	-	-	1	1	2
Шуруп 2А3-13	50	64	42	42	50
Евровинт V6310	24	24	8	12	24
Винт М5х12	-	-	-	4	8
Регулируемая опора	4	4	4	4	4
Заглушка конфирмат	16	20	12	12	12
Полкодержатель	8	16	12	4	12
Полкодержатель под ст	-	-	-	8	8
Профиль стыковочный	1	-	-	-	1
Штангодержатель	-	2	-	-	-

9. Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100236	100237	100238	100239
Стенка задняя (лев., прав.)	1	1	2	2
Полка	2	2	2	2
Дверь нижняя	1	1	1	1
Дверь стеклянная	1 (510х745)	1 (510х745)	1 (540х795)	1 (540х795)
Короб	3	3	3	3
Стенка боковая (лев., прав.)	2	2	2	2
Регулируемая опора	4	4	4	4
Полка стеклянная	2 (270х565)	2 (270х565)	2 (350х595)	2 (350х595)
Саморез 4,2х13	25	25	30	30
Саморез 3х17	4	4	4	4
Защелка магнитная	2	2	2	2
Замок мебельный	1	1	1	1
Втулка ПВХ	4	4	4	4
Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.)	1*	1*	1*	1*
Петля для стекла (2 шт.) + ручка	1	1	1	1
Полкодержатель	16	16	16	16
Гайка М5+Шайба 5	11	11	12	12
Винт М5х12	16	16	27	27

* комплектуется по согласованию с заказчиком

Наименование	Количество, шт.			
	100240	100241	100242	100243
Стенка задняя	1	1	1	1
Полка	4	4	4	4
Дверь	2	2	2	2
Короб	3	3	3	3
Стенка боковая (лев., прав.)	2	2	2	2
Регулируемая опора	4	4	4	4
Винт М5х12	26	26	26	26
Шайба 5	26	26	26	26
Саморез 3х17	4	4	4	4

Защелка магнитная	2	2	2	2
Замок мебельный	2	2	2	2
Втулка ПВХ / Ось мебельная	4/4	4/4	4/4	4/4
Полкодержатель	16	16	16	16
Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.)	1*	1*	1*	1*

* комплектуется по согласованию с заказчиком

Наименование	Количество, шт.							
	100244	100245	100246	100247	100248	100249	100250	100251
Стенка задняя (лев., прав.)	2	2	2	2	2	2	2	2
Полка	2	2	2	2	2	2	2	2
Дверь	2	2	2	2	2	2	2	2
Короб	3	3	3	3	3	3	3	3
Стенка боковая (лев., прав.)	2	2	2	2	2	2	2	2
Дверь стеклянная	2 (318х747)	2 (318х747)	2 (367х792)	2 (367х792)	2 (318х747)	2 (318х747)	2 (367х792)	2 (367х792)
Полка стеклянная	2 (272х695)	2 (272х695)	2 (352х795)	2 (352х795)	2 (272х695)	2 (272х695)	2 (352х795)	2 (352х795)
Регулируемая опора	4	4	4	4	4	4	4	4
Винт М5х12	29	29	26	26	29	29	26	26
Гайка М5	25	25	25	25	25	25	25	25
Саморез 4,2х13	20	20	23	23	20	20	23	23
Саморез 3х17	8	8	8	8	8	8	8	8
Защелка магнитная	4	4	4	4	4	4	4	4
Замок мебельный	1	1	1	1	1	1	1	1
Втулка ПВХ	8	8	8	8	8	8	8	8
Ручка для стекла	2	2	2	2	2	2	2	2
Петля для стекла	4	4	4	4	4	4	4	4
Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.)	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*
Полкодержатель	16	16	16	16	16	16	16	16

* комплектуется по согласованию с заказчиком

10. Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.					
	100255	100256	100257	100258	100259	100260
Стойка	4	4	4	5	5	5
Полка	4	4	4	5	5	5
Подпятник	4	4	4	4	4	4
Уголок (стяжка)	16	16	16	16	16	16
Винт М5х12	40	40	40	48	48	48
Шайба 5	40	40	40	48	48	48
Гайка М5	40	40	40	48	48	48

11. Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.
	100265
Ложе	1
Стойка левая	1

Стойка правая	1
Стяжка	1
Болт М10х45	6
Шайба	6
Заглушка	4
Наименование	Количество, шт.
	100266
Лож с каркасом и подголовником	1
Ножка	4
Гайка М10	8
Шайба пружинная 10	4
Заглушка	6

12. Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения:


Наименование	Количество, шт.					
	100284	100285	100286	100287	100288	100289
Экран	1	1	1	1	1	1
Стяжка	2	2	2	2	2	2
Стойка одинарная	1	1	1	1	1	1
Стойка двойная	1	1	1	1	1	1
Колодка ПВХ, соединительная	4	4	4	4	4	4
Болт М6х30	4	4	4	4	4	4
Шайба 6 пружинная	4	4	4	4	4	4
Болт М4х20	2	2	2	2	2	2
Шайба 4	2	2	2	2	2	2
Гайка М4	2	2	2	2	2	2
Заглушка МСК302/4	5	5	5	-	-	-

13. Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.					
	100290	100291	100292	100293	100294	100295
Экран	1	1	1	1	1	1
Стяжка	2	2	2	2	2	2
Стойка одинарная	1	1	1	1	1	1
Стойка двойная	1	1	1	1	1	1
Колесо	3	3	3	3	3	3
Колодка, соединительная	4	4	4	4	4	4
Болт М6х30	4	4	4	4	4	4
Шайба 6 пружинная	4	4	4	4	4	4
Болт М4х20	2	2	2	2	2	2
Шайба 4	2	2	2	2	2	2
Гайка М4	2	2	2	2	2	2
Заглушка МСК302/4	2	2	2	-	-	-


Инструкция по сборке «Стол врача для проведения терапевтических процедур, в вариантах исполнения»:

Стол врача для проведения терапевтических процедур 1200х600х750 мм, артикул 100140;
 Стол врача для проведения терапевтических процедур 1400х600х750 мм, артикул 100141;
 Стол врача для проведения терапевтических процедур 1200х600х750 мм № 2, артикул 100145;
 Стол врача для проведения терапевтических процедур 1400х700х750 мм, артикул 100147.

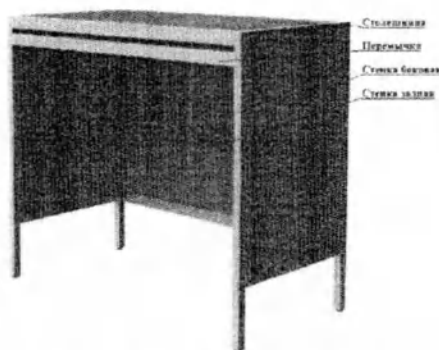


1. Соединить боковые стенки с перемычками и стенкой задней при помощи эксцентриковых стяжек.
2. Установить столешницу и закрепить при помощи уголков и шурупов.
3. Установить регулируемые опоры в стенки боковые.

Стол врача для проведения терапевтических процедур с тумбой 1200х600х750 мм, артикул 100142;
 Стол врача для проведения терапевтических процедур с тумбой 1400х600х750 мм, артикул 100143;
 Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с дверцей, артикул 100149;
 Стол врача для проведения терапевтических процедур со встроенной тумбой с дверцей, артикул 100150;

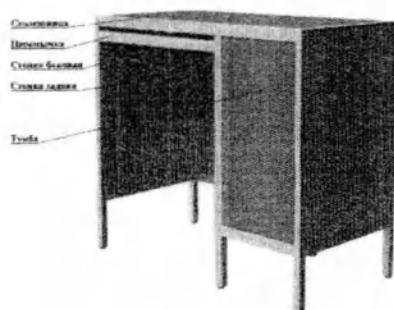

1. Соединить боковую стенку с перемычками, стенкой задней и тумбой при помощи эксцентриковых стяжек.
2. Установить столешницу и закрепить при помощи уголков и шурупов.
3. Установить полку в тумбе на полкодержатели.
4. Установить регулируемые опоры в стенки боковые.

Стол врача для проведения терапевтических процедур с тремя ящиками, артикул 100144;
 Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с тремя ящиками, артикул 100146;
 Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с тремя ящиками 1200х600х750 мм, артикул 100151;
 Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с тремя ящиками 1400х700х750 мм, артикул 100152;


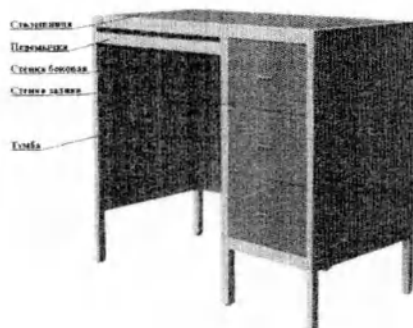


1. Соединить боковую стенку с перемычками, стенкой задней и тумбой при помощи эксцентриковых стяжек.
2. Установить столешницу и закрепить при помощи уголков и шурупов.
3. Установить регулируемые опоры в стенки боковые.


Инструкция по сборке «Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения»:

Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100119

1. Скрепить при помощи стяжек-эксцентров и шкантов дно (1) с боковыми стенками (2).
2. Между боковинами (2) при помощи шкантов установить полку (4).

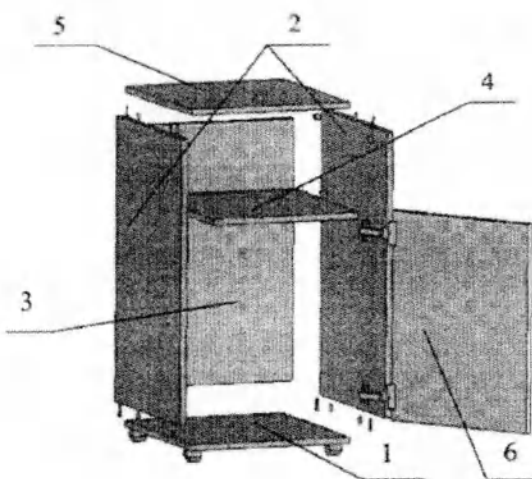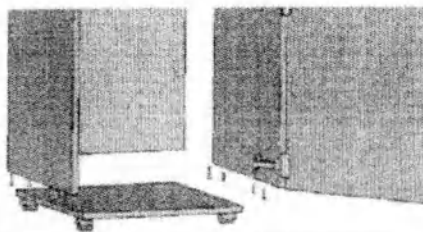

3. Вставить стенку заднюю (3) в пазы боковин (2).
4. При помощи стяжек-эксцентров и шкантов сверху установить крышку (5).

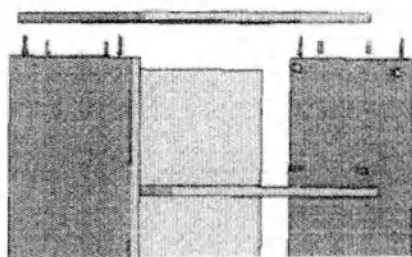

5. С помощью петель навесить дверь (6), отрегулировать ее положение, используя для этого предусмотренные винты на петлях.
6. Используя винты установить на дверь ручку, а снизу к дну (1) установить колеса.

Стол врача для проведения терапевтических процедур двутумбовый с тремя ящиками и тумбой, артикул 100148;



Стол врача для проведения терапевтических процедур двутумбовый, с тремя ящиками в одной и с дверкой в другой, артикул 100153




1. Соединить тумбы с перемычками и стенкой задней при помощи эксцентриковых стяжек.
2. Установить столешницу и закрепить при помощи уголков и шурупов.
3. Установить полку в тумбе на полкодержатели.
4. Установить регулируемые опоры в стенки боковые.

Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100120

1. Скрепить дно (3) при помощи стяжек-эксцентров и шкантов с боковыми стенками (2).
2. Установить заднюю стенку (4) с дном (3) и боковыми стенками (2), заведя заднюю стенку в пазы.

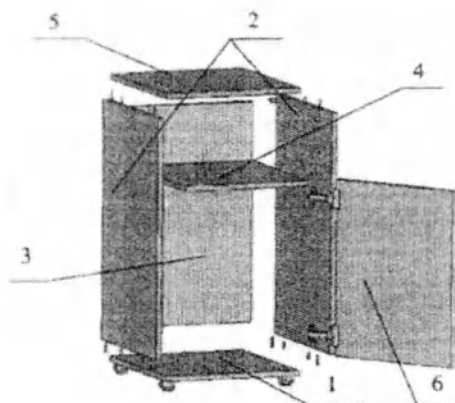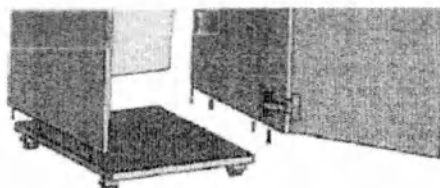



3. При помощи стяжек-эксцентров и шкантов сверху установить крышку (5).
4. К боковинам (2) установить направляющие, используя для этого предусмотренные конструкцией шурупы.

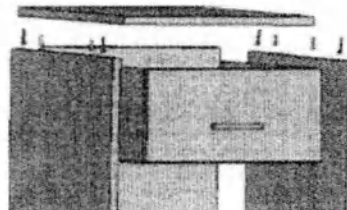

5. С помощью петель навесить дверь (6), отрегулировать ее положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.
6. Собрать ящик (1) при помощи стяжек-эксцентров и шкантов. Дно ящика завести в паз на боковинах и лицевой панели. Прикрепить направляющие при помощи шурупов.
7. Установить ящик (1).
8. Используя винты установить на дверь (6) и ящик (1) ручки, а снизу к дну (1) закрепить колеса.

Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой № 2, артикул 100129

1. Скрепить дно (3) при помощи стяжек-эксцентров и шкантов с боковыми стенками (1).
2. Прикрепить заднюю стенку (4) с дном (3) и боковыми стенками (1), заведя заднюю стенку (4) в пазы.

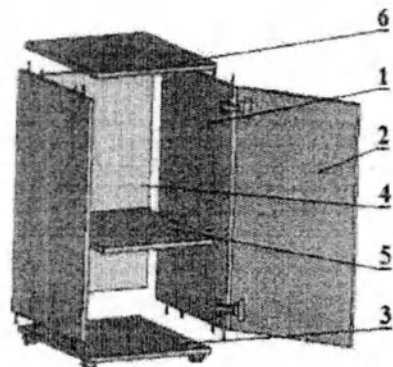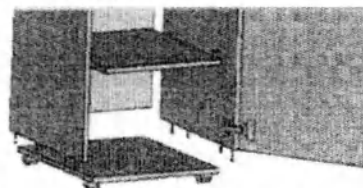

3. При помощи стяжек-эксцентров и шкантов сверху установить крышку (6).
4. Между боковинами (1) при помощи полкодержателей установить полку (5).


5. С помощью петель навесить дверь (2), отрегулировать ее положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

6. Используя винты на дверь (2) прикрепить ручку, а снизу к дну (3) установить колеса.


Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 3, артикул 100130

1. Скрепить при помощи стяжек-эксцентриков и шкантов дно (2) с боковыми стенками (3).

2. Прикрепить заднюю стенку (4) с дном (2) и боковыми стенками (3), заведя заднюю стенку (4) в пазы.

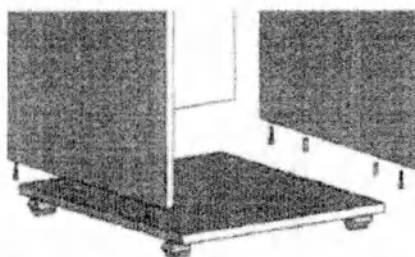

3. При помощи стяжек-эксцентриков и шкантов сверху установить крышку (5).

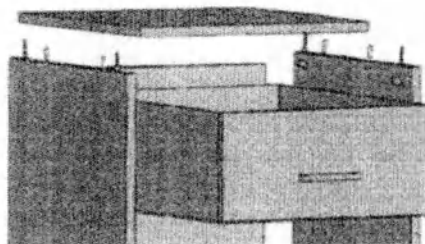


4. К боковинам (3) установить направляющие, используя для этого предусмотренные конструкцией шурупы.

5. Собрать ящики (1) при помощи стяжек-эксцентриков и шкантов. Дно ящика завести в паз на боковинах и лицевой панели. Прикрепить направляющие при помощи шурупов.


5. Установить ящики (1).

6. Используя винты на ящики (1) прикрепить ручки, а снизу к дну (2) установить колеса.

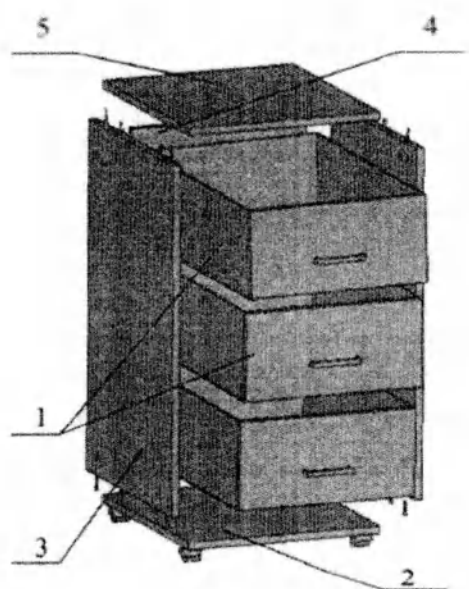


Инструкция по сборке «Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, в вариантах исполнения»

*Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, нишей и дверцей, артикул 100135;
Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, выдвижным ящиком и дверцей, артикул 100136;*

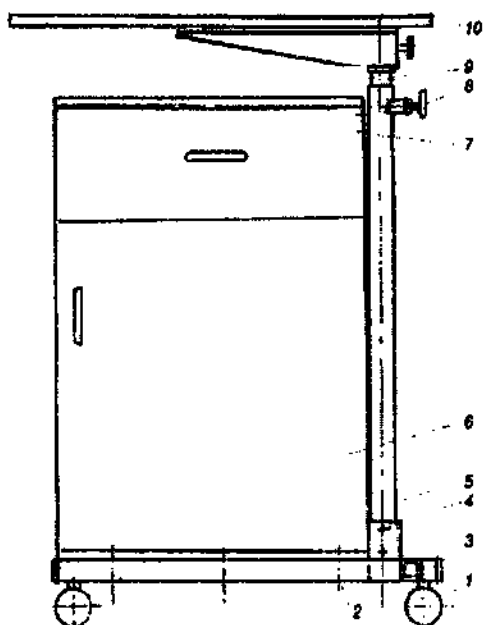

1. Собрать основание (3) и направляющую (5) с помощью винтов М6х45, шайб и гаск М6 (4) без затяжки.
2. Установить тумбу (6) на верхнюю крышку. Поместить сверху ранее собранный узел так, чтобы боковая стенка тумбы плотно прилегала к направляющей, а основание к днищу тумбы. Закрепить тумбу к основанию при помощи шурупов 5х35 (2).
3. Установить колеса (1) в основание.
4. Установить столик (10) на стойку (9) и закрепить рукояткой.
5. Установить узел столика на узел направляющей и закрепить рукояткой (8). Выровнять положение столика относительно верхней крышки столика и закрепить саморезами 4,2х19 (7).
6. Затянуть винтовое соединение основания и направляющей.

*Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, нишей и дверцей №2, артикул 100137;
Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, выдвижным ящиком и дверцей №2,
артикул 100138;*

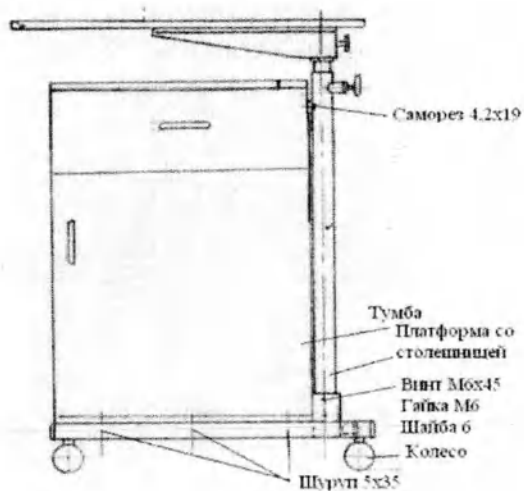


1. Прикрепить основание платформы к стойке платформы при помощи винтов М6х45 и гаек М6. Под гайки подложить шайбы 6.

2. Прикрепить тумбу к платформе при помощи шурупов 5х35 и саморезов 4,2х19.

3. Прикрепить колеса к платформе.


Инструкция по сборке «Тумба медицинская под аппаратуру»

Тумба медицинская под аппаратуру, артикул 100139

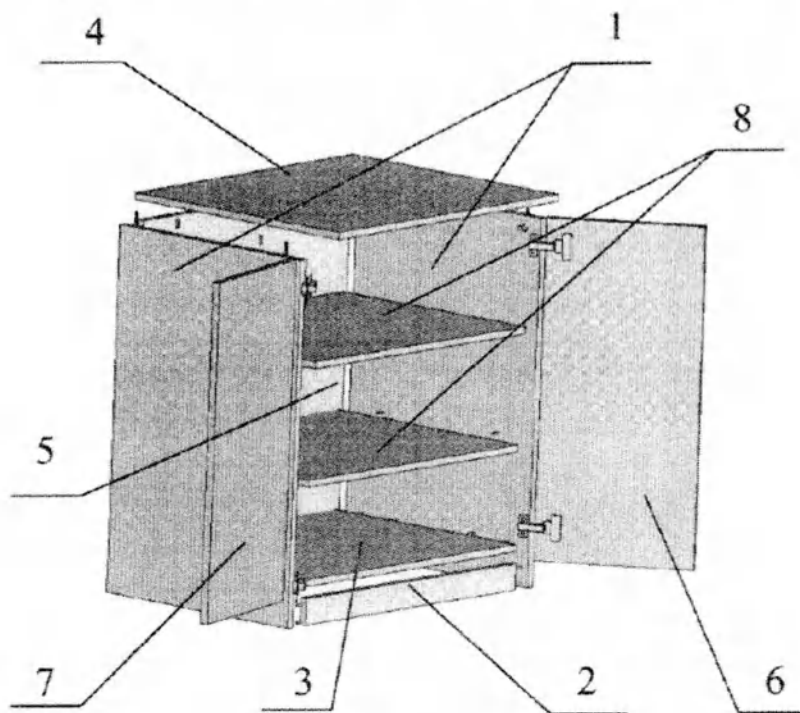


1. Скрепить при помощи стяжек-эксцентриков и шкантов крышку (4), при помощи конфирматов и шкантов дно (3) и шкантами - порог (2) с боковыми стенками (1).

2. С помощью шурупов и стыковочного профиля скрепить стенки задние (5) с боковинами (1).

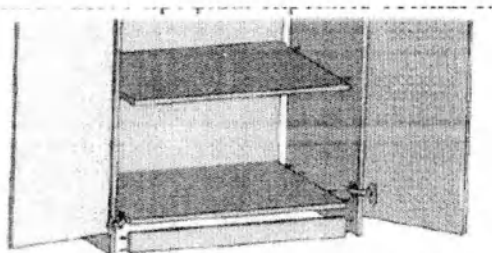

3. Между боковинами (1) при помощи полкодержателей установить полки (8).
4. С помощью петель навесить двери (6, 7), отрегулировать их взаимное положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

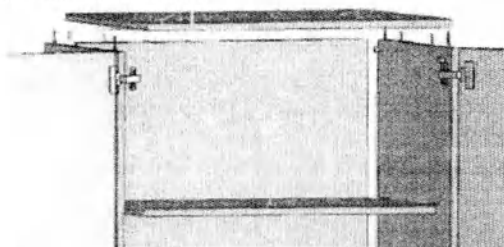

5. Используя винты на двери (6, 7) прикрепить ручки, а под боковины (1) с помощью шурупов установить подпятники.


Инструкция по сборке «Стол медицинский, в вариантах исполнения»:

Стол медицинский 850x750x750 мм, артикул 100168

Стол медицинский 1000x750x750 мм, артикул 100169

Стол медицинский 850x750x750 мм №2, артикул 100170

Стол медицинский 1000x750x750 мм №2, артикул 100171

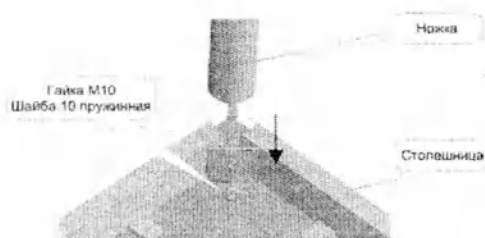


1. Распаковать комплектующие.
2. Установить ножки. Прикрутить их гайками М10 с шайбами 10 пружинными.



Инструкция по сборке «Стол медицинский подкатной, в вариантах исполнения»


*Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты, артикул 100164;
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №2, артикул 100165;
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №3, артикул 100166;
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №4, артикул 100167;*

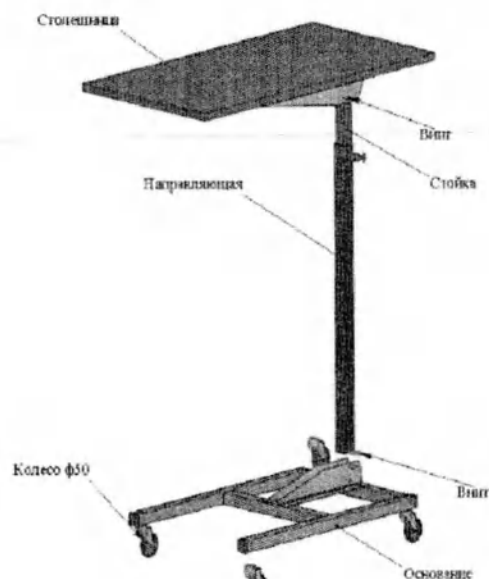

1. Прикрепить вертикальную направляющую к основанию стола при помощи винтов М6, гаек и шайб.
2. Прикрепить столешницу к стойке при помощи винтов М6, гаек и шайб.
3. В направляющую вставить стойку столешницы и зафиксировать на необходимой высоте при помощи рукоятки.
4. Прикрутить колеса к основанию при помощи винтов М10 и шайб пружинных.


Инструкция по сборке «Стол медицинский инструментальный, в вариантах исполнения»:

Стол медицинский инструментальный с нишей и дверкой, артикул 100173

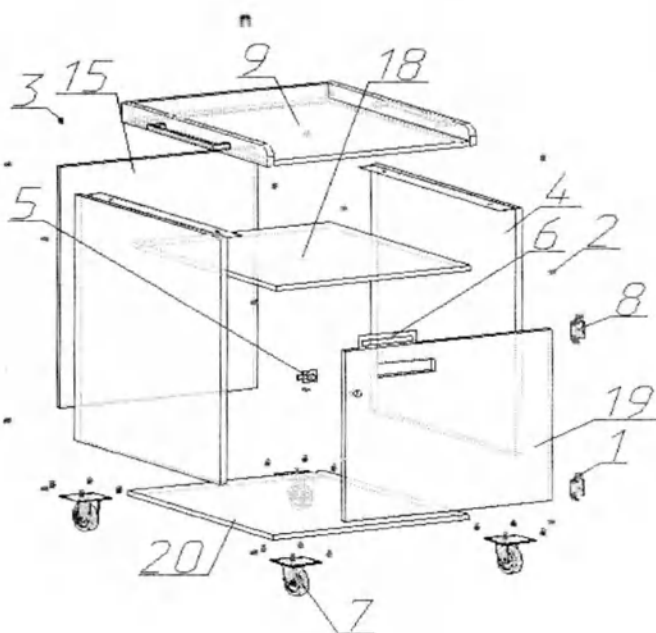


1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (20) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Установить замок (5) в нижний фасад (19).
3. Установить ручки (6) в фасады (19).
4. Прикрепить петли (8) к фасадам (19) при помощи винтов (2).
5. Прикрепить боковины (4) ко дну (20) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Прикрепить полку (18) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить столешницу (9) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (1).
9. Навесить фасад (19) при помощи петель (8), прикрутив части петель к правой боковине (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).

Стол медицинский инструментальный с выдвижным ящиком и дверкой, артикул 100174

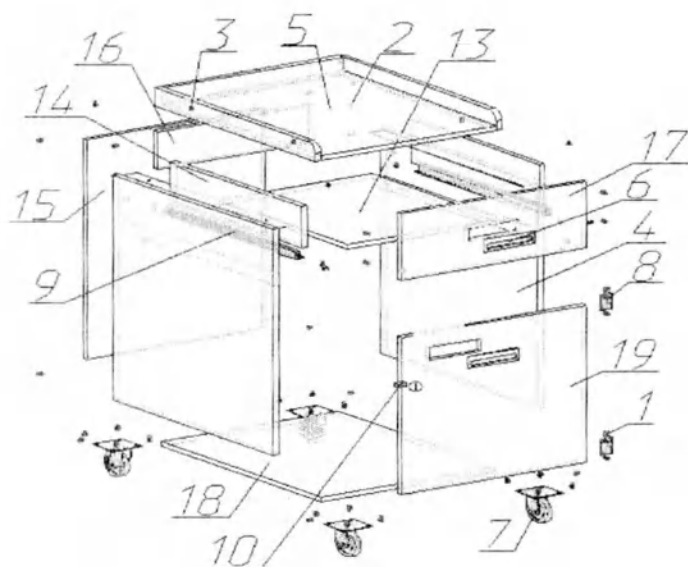


1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Установить замок (10) в нижний фасад (19).
3. Установить ручки (6) в фасады (17, 19).
4. Прикрепить петли (8) к фасадам (19) при помощи винтов (2).
5. Прикрепить боковины (4) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Собрать детали ящиков (13, 14, 16), между собой при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить фасад (17) к корпусу ящика при помощи винтов (2) через заклепки (1).
9. Прикрепить столешницу (5) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (3).
10. Установить выдвижной ящик при помощи направляющих (9), прикрепив части направляющих к боковинам (4) и боковинам ящиков (14) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
11. Навесить фасад (19) при помощи петель (8), прикрутив части петель к правой боковине (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).

Стол медицинский инструментальный с тремя выдвижными ящиками, артикул 100175

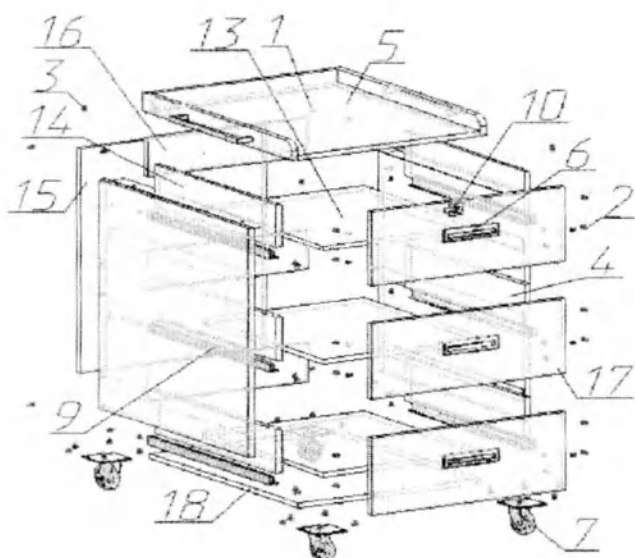


1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Установить замок (10) в нижний фасад (17).
3. Установить ручки (6) в фасады (17).
4. Прикрепить боковины (4) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
5. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Собрать детали ящиков (13, 14, 16), между собой при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Прикрепить фасад (17) к корпусу ящика при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить столешницу (5) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (3).
9. Установить выдвижной ящик при помощи направляющих (9), прикрепив части направляющих к боковинам (4) и боковинам ящиков (14) при помощи винтов (2) через заклепки (1).

Стол медицинский инструментальный с двумя нишами и дверками, артикул 100176

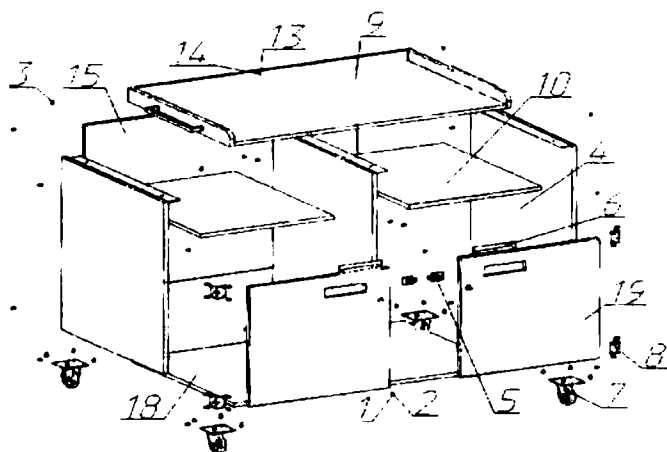


1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Установить замок (5) в нижний фасад (19).
3. Установить ручки (6) в фасады (19).
4. Прикрепить петли (8) к фасадам (19) при помощи винтов (2).
5. Прикрепить боковины (4) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Прикрепить полку (10) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить столешницу (9) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (3).
9. Навесить фасад (19) при помощи петель (8), прикрутив части петель к правой боковине (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).

Стол медицинский инструментальный широкий с двумя выдвижными ящиками и нишей, артикул 100177

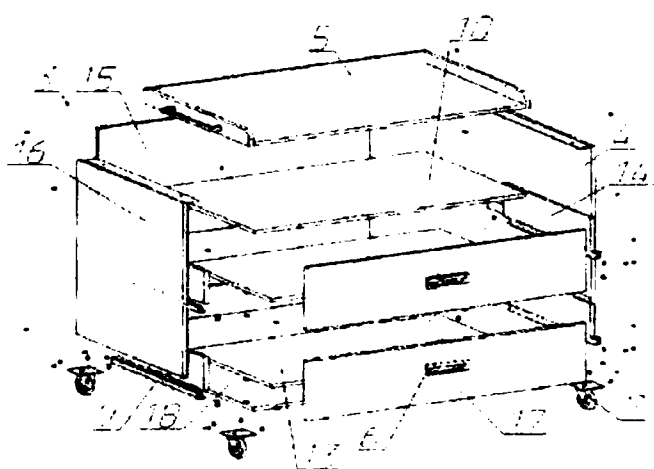


1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Прикрепить полку (10) к боковинам (4) на винты (2) через заклепки (1).
3. Установить ручки (6) в фасады (17).
4. Прикрепить боковины (4) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
5. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Собрать детали ящиков (13, 14, 16), между собой при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Прикрепить фасады (17) к корпусам ящиков при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить столешницу (5) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (3).
9. Установить выдвижные ящики при помощи направляющих (9), прикрепив части направляющих к боковинам (4) и боковинам ящиков (14) при помощи винтов (2) через заклепки (1).

Стол медицинский инструментальный широкий с тремя выдвижными ящиками, артикул 100178

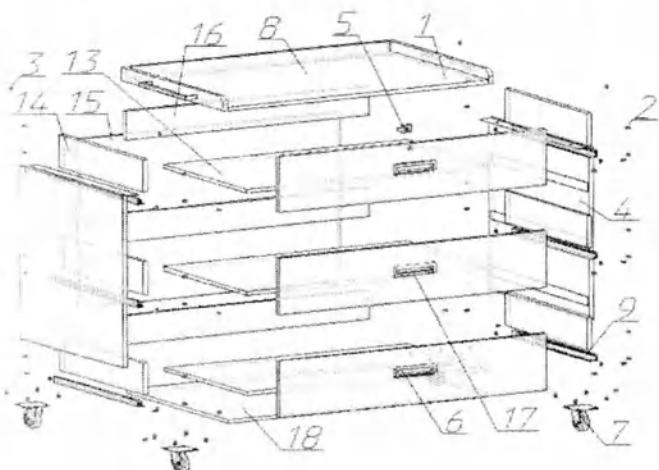

1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Установить замок (5) в нижний фасад (17).
3. Установить ручки (6) в фасады (17).
4. Прикрепить боковины (4) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
5. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Собрать детали ящиков (13, 14, 16), между собой при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Прикрепить фасады (17) к корпусам ящиков при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить столешницу (8) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (3).
9. Установить выдвижные ящики при помощи направляющих (9), прикрепив части направляющих к боковинам (4) и боковинам ящиков (14) при помощи винтов (2) через заклепки (1).


Стол медицинский инструментальный с двумя выдвижными ящиками и дверками, артикул 100179

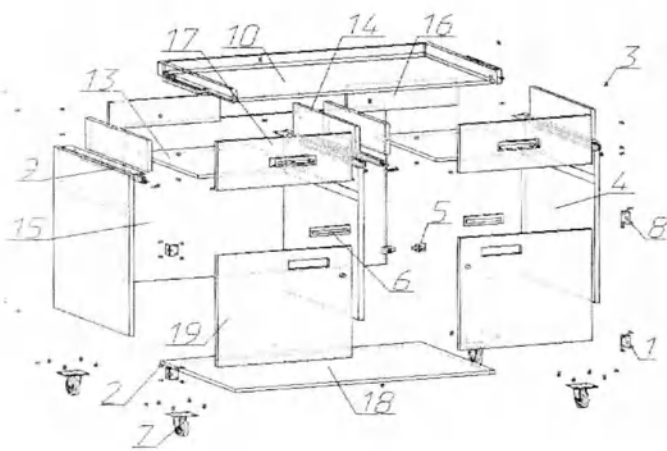

1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Установить замок (5) в нижний фасад (19).
3. Установить ручки (6) в фасады (17, 19).
4. Прикрепить петли (8) к фасадам (19) при помощи винтов (2).
5. Прикрепить боковины (4) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Собрать детали ящиков (13, 14, 16), между собой при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить фасады (17) к корпусу ящика при помощи винтов (2) через заклепки (1).
9. Прикрепить столешницу (10) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (3).
10. Установить выдвижные ящики при помощи направляющих (9), прикрепив части направляющих к боковинам (4) и боковинам ящиков (14) при помощи винтов (2) через заклепки (1).

11. Навесить фасад (19) при помощи петель (8), прикрутив части петель к правой боковине (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).


Стол медицинский инструментальный с четырьмя выдвижными ящиками и дверкой, артикул 100180

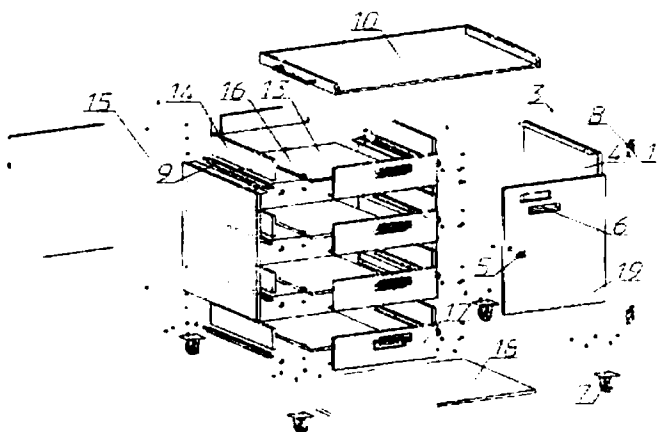


1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Установить замок (5) в нижний фасад (19).
3. Установить ручки (6) в фасады (17, 19).
4. Прикрепить петли (8) к фасадам (19) при помощи винтов (2).
5. Прикрепить боковины (4) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Собрать детали ящиков (13, 14, 16), между собой при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить фасад (17) к корпусу ящика при помощи винтов (2) через заклепки (1).
9. Прикрепить столешницу (10) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (3).
10. Установить выдвижной ящик при помощи направляющих (9), прикрепив части направляющих к боковинам (4) и боковинам ящиков (14) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
11. Навесить фасад (19) при помощи петель (8), прикрутив части петель к правой боковине (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).

Инструкция по сборке «Шкаф медицинский, в вариантах исполнения»:

Шкаф медицинский с двумя дверьми и пятью полками, с регулируемыми опорами, артикул 100219

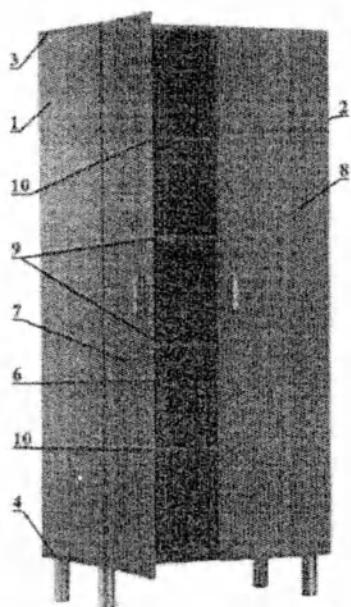


1. При помощи конфирматов и шкантов скрепить боковые стенки (1, 2) с крышкой (3), полками (9), дном (4).
2. С помощью шурупов и стыковочного профиля скрепить стенку заднюю (6) с боковыми стенками (1, 2), крышкой (3) и дном (4).
3. Между боковинами (1, 2) на полкодержателях установить полки (10).
4. Прикрепить петли к дверям (7, 8) при помощи евровинтов.
5. Прикрепить двери (7, 8) к боковым стенкам при помощи евровинтов, отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

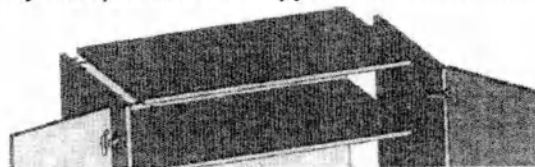


6. Используя винты на двери (7, 8) прикрепить ручки, а на дно с помощью шурупов установить регулируемые опоры.

Шкаф медицинский двустворчатый, с двумя вертикальными отделениями, с регулируемыми опорами, артикул 100220

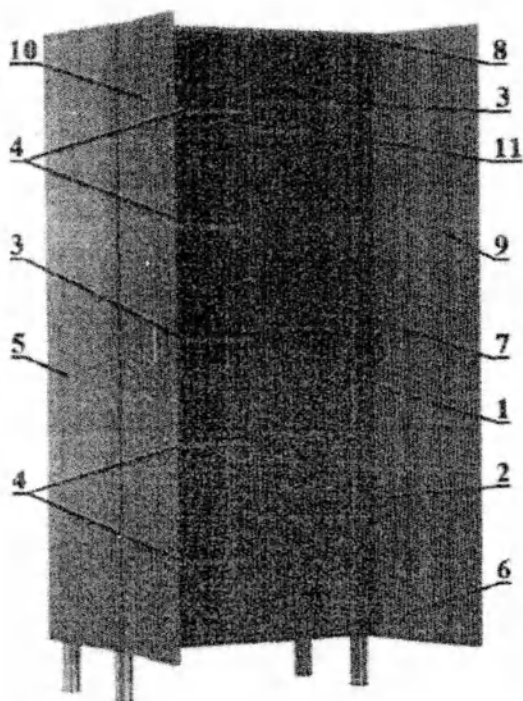


1. Соединить стенки (1, 2, 5) с крышкой (8) и дном (6) с помощью конфирматов и шкантов.
2. Установить при помощи конфирматов и шкантов полки (3).
3. С помощью шурупов прикрепить стенки задние (7) к боковым стенкам (1, 5), крышке (8), дну (6) и стойке (2).
4. Между стойкой (2) и боковой стенкой (5) на полкодержателях установить полки (4), а также прикрепить при помощи шурупов штангодержатели и установить штангу.

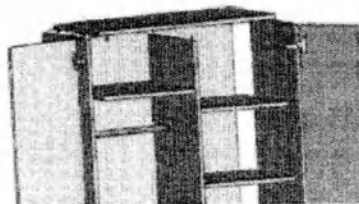


5. Прикрепить петли к дверям (9, 10) при помощи евровинтов.
6. Прикрепить двери (9, 10) к боковым стенкам при помощи евровинтов, отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.
7. Используя винты на двери (9, 10) прикрепить ручки, а на дно с помощью шурупов установить регулируемые опоры.


Шкаф медицинский одностворчатый с открытой секцией, артикул 100233

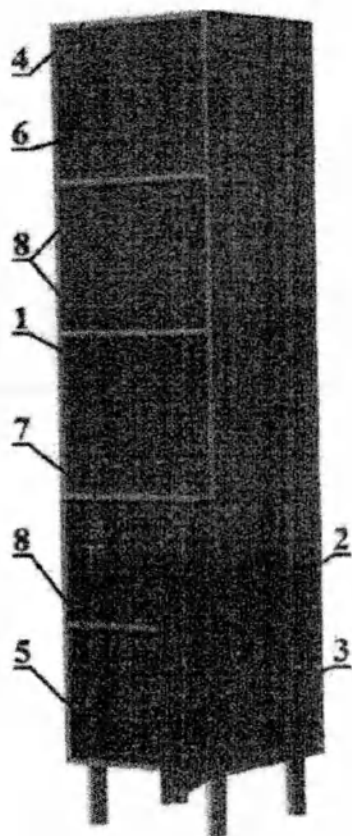

1. При помощи конфирмагов и шкантов скрепить боковые стенки (1, 2) с крышкой (4), полкой (8), дном (5) и шкантами с порогом (6).
2. С помощью шурупов скрепить стенку заднюю (6) с боковыми стенками (1, 2), крышкой (4) и дном (5).

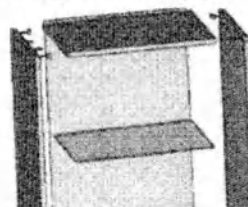


3. Между боковинами (1, 2) на полкодержателях установить полки (9).
4. С помощью петель навесить дверь (3), отрегулировать ее положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

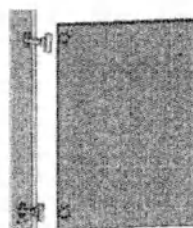


5. Используя винты на дверь (3) прикрепить ручку-скобу, а под боковины (1, 2) с помощью саморезов установить регулируемые опоры.


Шкаф медицинский одностворчатый с двумя дверцами, артикул 100234

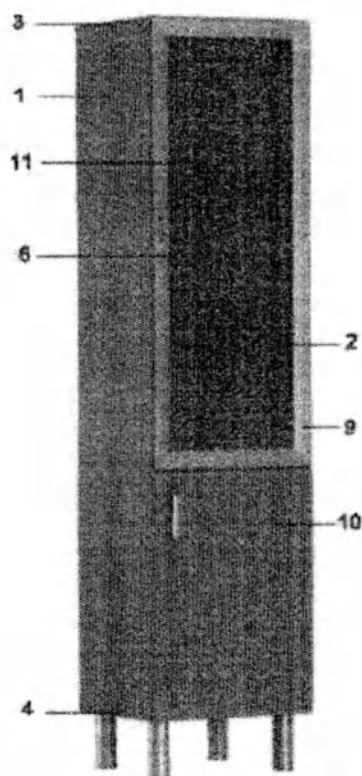

1. При помощи конфирматов и шкантов скрепить боковые стенки (1, 2) с крышкой (3), полкой (7), дном (4).
2. С помощью шурупов скрепить стенку заднюю (6) с боковыми стенками (1, 2), крышкой (3) и дном (4).

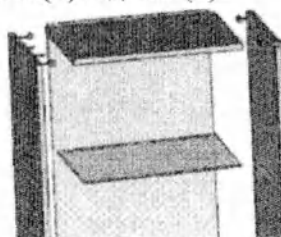


3. Между боковинами (1, 2) на полкодержателях установить полку (8) и стеклянные полки (11).
4. С помощью петель навесить дверь (10) и стеклянную дверь (9), отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

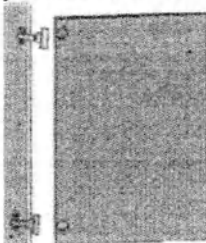


5. Используя винты на двери (9, 10) прикрепить ручки, а под боковины (1, 2) с помощью саморезов установить регулируемые опоры.

Шкаф медицинский двухсекционный, двустворчатый с четырьмя дверцами, артикул 100235

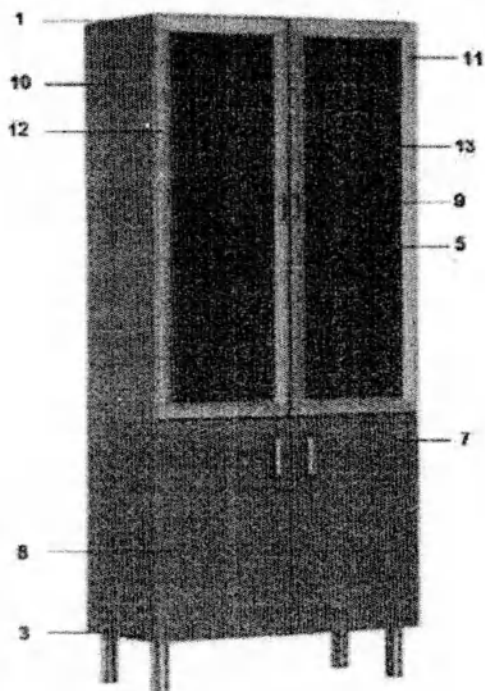

1. Скрепить при помощи стяжек-эксцентриков и шкантов боковые стенки (9, 10) с крышкой (1), с полкой (2), дном (3).
2. С помощью саморезов или гвоздей скрепить стенку заднюю (5) с боковыми стенками (9, 10), крышкой (1) и дном (3).

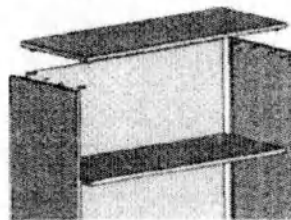

3. Между боковинами (9, 10) на полкодержателях установить полку (6) и стеклянные полки (13).
4. С помощью петель навесить двери (7, 8) и стеклянные двери (11, 12), отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.
5. Используя винты на двери (7, 8, 11, 12) прикрепить ручки, а под боковины (9, 10) с помощью саморезов установить регулируемые опоры.


Инструкция по сборке «Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения»:

Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100236;



Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100237;

Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100238;

Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100239

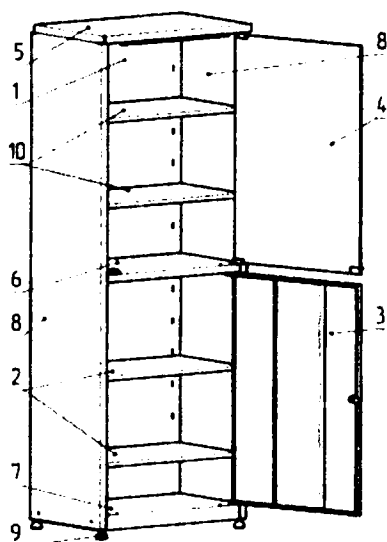

1. Соединить стенки задние (1) при помощи винтов и гаек М5. Работы производить на ровной и чистой поверхности.

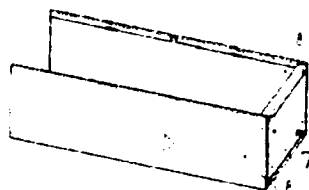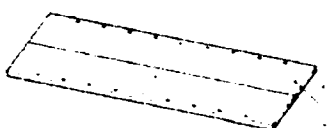

2. Вставить боковые стенки (8) в короб нижний (7) и закрепить при помощи саморезов 4,2х13.


3. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2х13.

4. Прикрепить короб верхний (5) при помощи винтов и гаек М5.

5. Прикрепить короб средний (6) - завести в пазы на боковых стенках (8) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.


6. Прикрепить регулируемые опоры (9) к коробу нижнему (7).

Если шкаф оснащен ножками металлическими (16) прикрепить их к коробу нижнему (7) при помощи болтов М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (9).

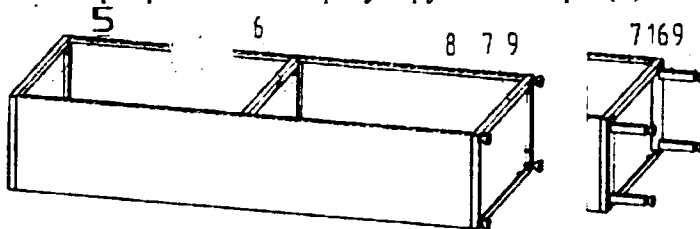

8. Собрать дверь металлическую (3), вставить замок мебельный (14).

9. Собрать дверь стеклянную (4): прикрепить ручку и петли (17).

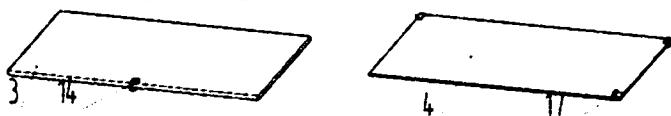


10. Установить защелки магнитные (13) при помощи саморезов 3х17.

11. Установить втулки (15) в места крепления дверей.

12. Установить двери (3). Для этого вставить винт М5 через отверстие в двери во втулку, а затем подогнуть фиксатор на двери.

13. Установить двери (4).

14. Установить полки (2, 10) на полкодержатели (18).

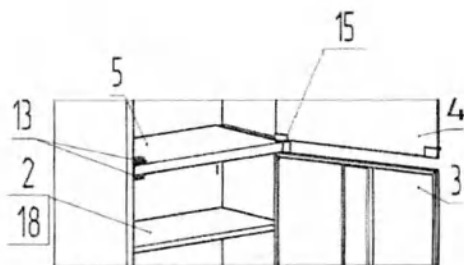


Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100240;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100241;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100242;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100243

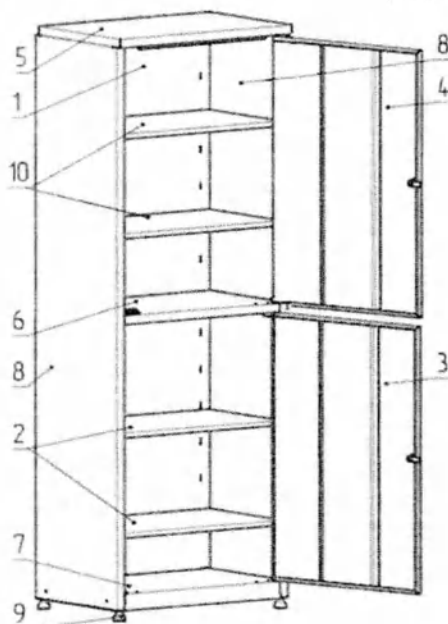

1. Соединить боковые стенки (8) со стенкой задней (1). Для этого нужно завести боковые стенки сверху в отгибы в задней стенке. Зафиксировать их винтами.

2. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2x13.

3. Прикрепить короб средний (6) - завести в пазы на боковых стенках (8) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.

4. Установить втулки ПВХ в отверстия в коробе среднем сверху и снизу и в коробе верхнем.

5. Установить оси в короб средний и в верхнее отверстие двери. Поставить верхнюю дверь (4).


6. Прикрепить короб верхний (5) при помощи винтов и гаек М5.

7. Снизу установить короб нижний (7), предварительно вставив в него втулку ПВХ, в верхнее отверстие двери — ось.

8. Установить нижнюю дверь, а короб нижний скрепить винтами.

9. Закрутить в короб нижний регулируемые опоры (9) и выставить ими такое положение шкафа, при котором двери открываются и закрываются свободно без заедания.

Если шкаф оснащен ножками металлическими (16) прикрепить их к коробу нижнему (7) при помощи болтов М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (9).

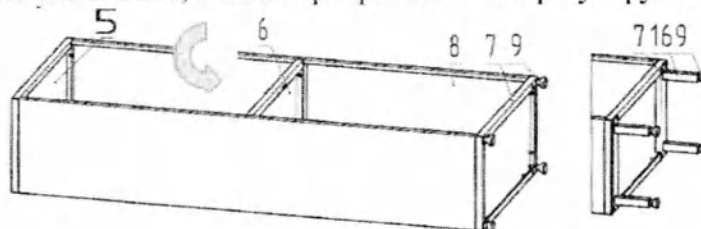


8. Собрать дверь металлическую (3, 4), вставить замок мебельный (14).



10. Установить защелки магнитные (13) при помощи саморезов 3x17.

14. Установить полки (2, 10) на полкодержатели (18).

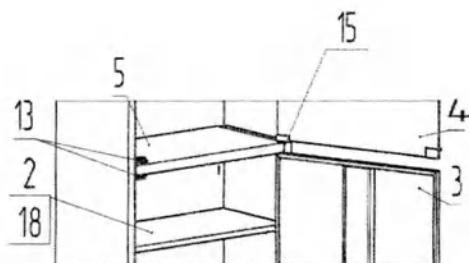


Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100244;


Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100245;

Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100246;

Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100247

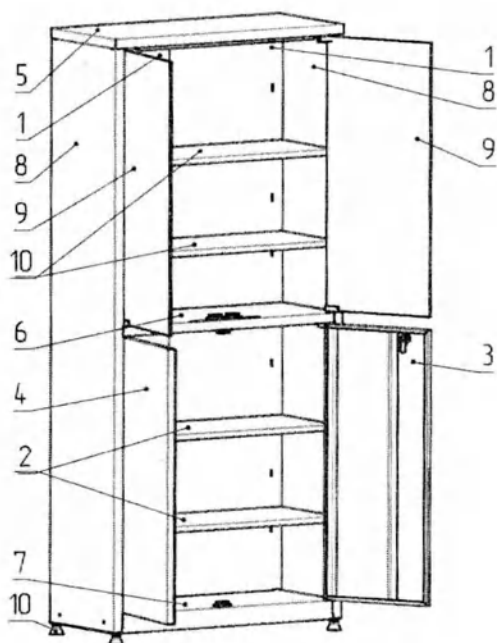

1. Соединить стенки задние (1) при помощи винтов и гаек М5. Работы производить на ровной и чистой поверхности.

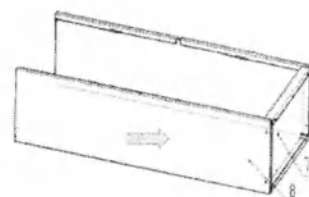

2. Вставить боковые стенки (8) в короб нижний (7) и закрепить при помощи саморезов 4,2x13.


3. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2x13.

4. Прикрепить короб верхний (5) при помощи винтов и гаек М5.

5. Прикрепить короб средний (6) - завести в пазы на боковых стенках (8) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.



6. Прикрепить регулируемые опоры (11) к коробу нижнему (7).

7. Если шкаф оснащен ножками металлическими (21) прикрепить их к коробу нижнему (7) при помощи болтов М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (11).

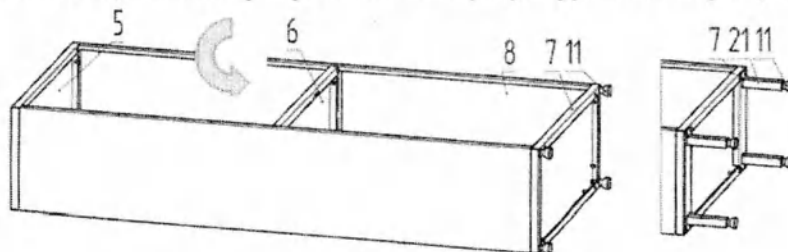

8. Собрать двери металлические (3): вставить замок мебельный (15).

9. Собрать двери стеклянные (9): прикрепить ручку (18) и нижние петли (19).

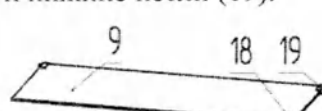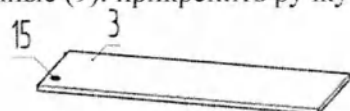


10. Установить защелки магнитные (15) при помощи саморезов 3x17.

11. Установить втулки (16) в места крепления дверей.

12. Установить двери (3, 4). Для этого вставить винт М5 через отверстие в двери во втулку, а затем подогнуть фиксатор на двери.

13. Установить двери (9). Для этого установить дверь с нижней петлей во втулку, затем установить верхнюю петлю и зафиксировать.

14. Установить полки (2) и (10) на полкодержатели (20).

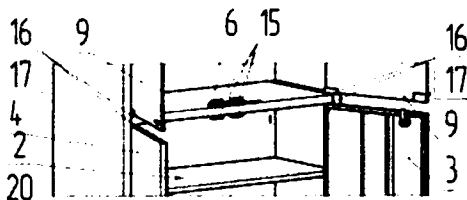


Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100248;



Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100249;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100250;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100251

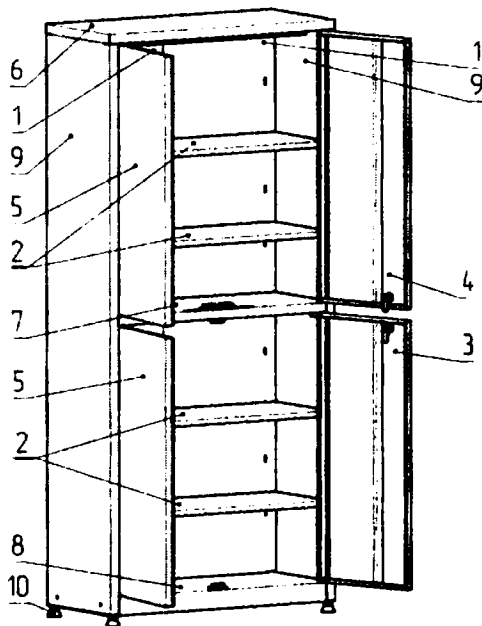

1. Соединить стенки задние (1) при помощи винтов и гаек М5. Работы производить на ровной и чистой поверхности.

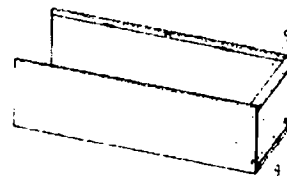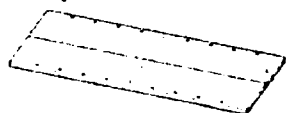

2. Вставить боковые стенки (9) в короб нижний (8) и закрепить при помощи саморезов 4,2х13.

3. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2х13.


4. Прикрепить короб верхний (6) при помощи винтов и гаек М5.

5. Прикрепить короб средний (7) - завести в пазы на боковых стенках (9) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.

6. Прикрепить регулируемые опоры (10) к корпусу нижнему (8).

Если шкаф оснащен ножками металлическими (18) прикрепить их к корпусу нижнему (8) при помощи болтов М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (10).

7. Собрать двери металлические (3, 4): вставить замок мебельный (14).

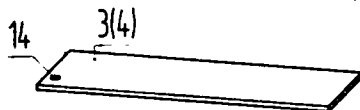


8. Установить защелки магнитные (13) при помощи саморезов 3х17.

10. Установить втулки (14) в места крепления дверей.

11. Установить двери (3, 4, 5). Для этого вставить винт М5 через отверстие в двери во втулку, а затем подогнуть фиксатор на двери.

12. Установить полки (2) на полкодержатели (17).

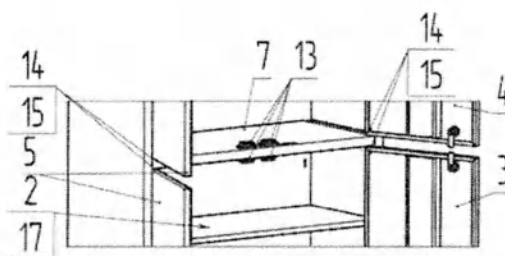

Инструкция по сборке «Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения»:

Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x300x2000 мм, артикул 100255;

Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x400x2000 мм, артикул 100256;



Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x500x2000 мм, артикул 100257;

Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x300x2000 мм, артикул 100258;

Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x400x2000 мм, артикул 100259;

Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x300x2000 мм, артикул 100260.


1. Положить стойки на горизонтальную поверхность, установить пластиковые подпятники.
2. Соединить стойки с полками с помощью винтов, шайб и гаек. Верхнюю и нижнюю полки соединять через стяжки (уголки).

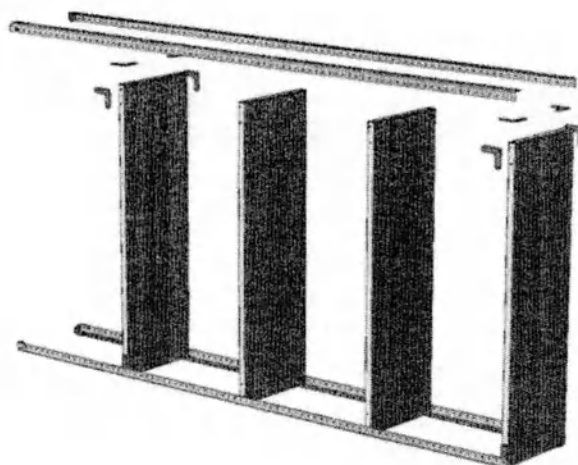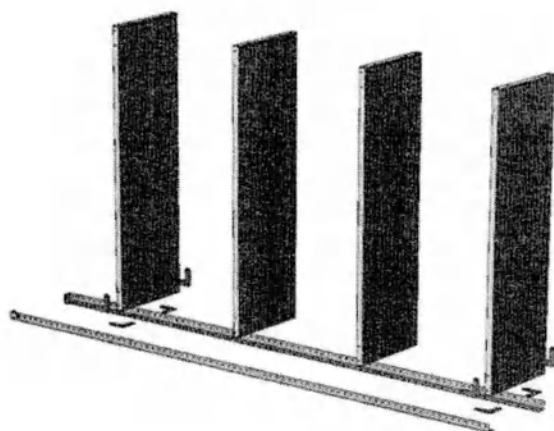

Инструкция по сборке «Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения»:


Кушетка медицинская смотровая бесступенчатая, артикул 100265

1. Соединить болтами раму и стойки, вставив упор в ушко на левой стойке. При этом ушко должно быть повернуто в сторону стойки.
2. Прикрепить болтами стяжку к стойкам.

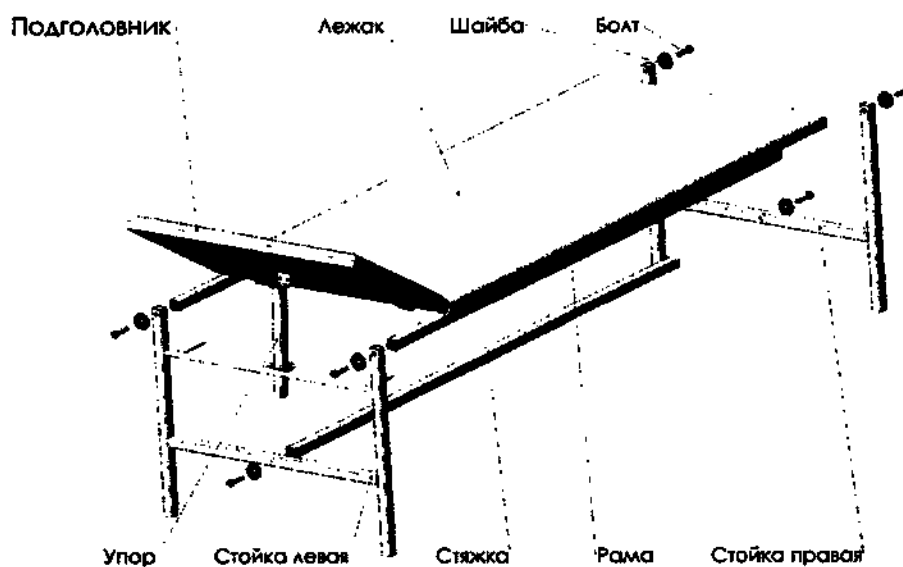


Кушетка медицинская смотровая со ступенчатым подголовником, артикул 100266

1. Прикрепить ножки к каркасу при помощи пары гаек М10 застопорив их пружинной шайбой 10.
2. Вставить в ножки заглушки.

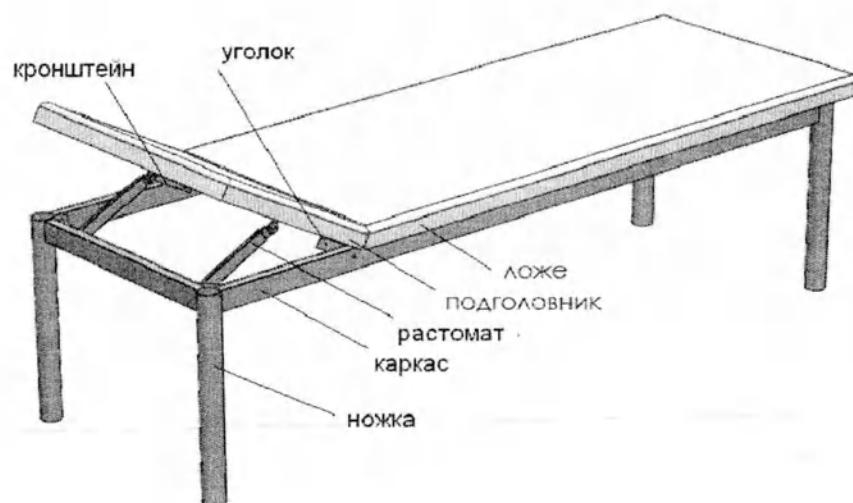

Инструкция по сборке «Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения» и «Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения»:


*Ширма медицинская стационарная, 1 секция, артикул 100284;
 Ширма медицинская стационарная, 2 секции, артикул 100285;
 Ширма медицинская стационарная, 3 секции, артикул 100286;
 Ширма медицинская передвижная, 1 секция, артикул 100290;
 Ширма медицинская передвижная, 2 секции, артикул 100291;
 Ширма медицинская передвижная, 3 секции, артикул 100292*

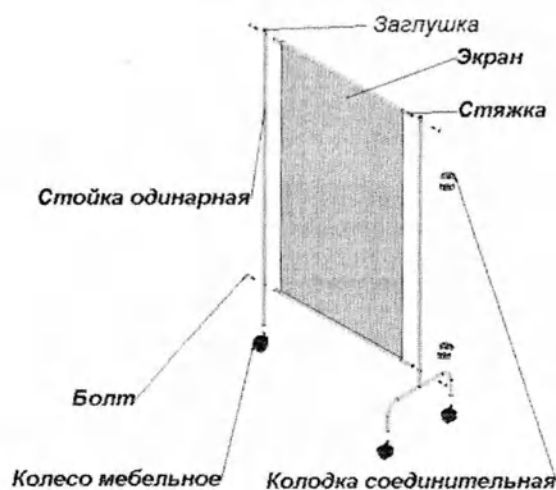

1. Продеть стяжки через полотно экрана.
2. Прикрепить стяжки экрана к стойкам болтами.
3. В зависимости от исполнения прикрепить колеса или вставить заглушки.
4. Соединить секции при помощи соединительных колодок.
5. Вставить заглушки в стойки.

*Ширма медицинская стационарная, 1 секция, артикул 100287;
 Ширма медицинская стационарная, 2 секции, артикул 100288;
 Ширма медицинская стационарная, 3 секции, артикул 100289;
 Ширма медицинская передвижная, 1 секция, артикул 100293;
 Ширма медицинская передвижная, 2 секции, артикул 100294;*

Ширма медицинская передвижная, 3 секции, артикул 100295

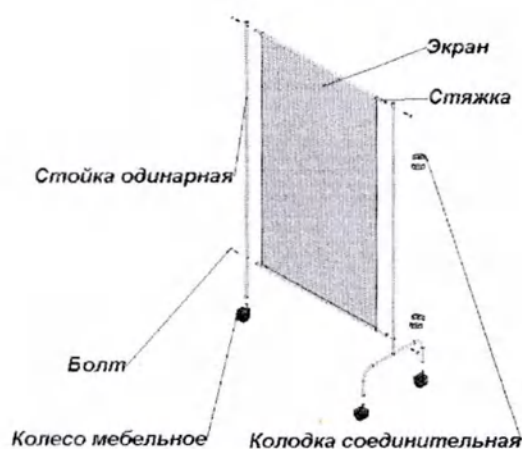


1. Продеть стяжки через полотно экрана.
2. Прикрепить стяжки экрана к стойкам болтами.
3. В зависимости от исполнения прикрепить колеса или вставить заглушки.
4. Соединить секции при помощи соединительных колодок.

Внешний вид. Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100118



Внешний вид. Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100121;

Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой № 2, артикул 100123

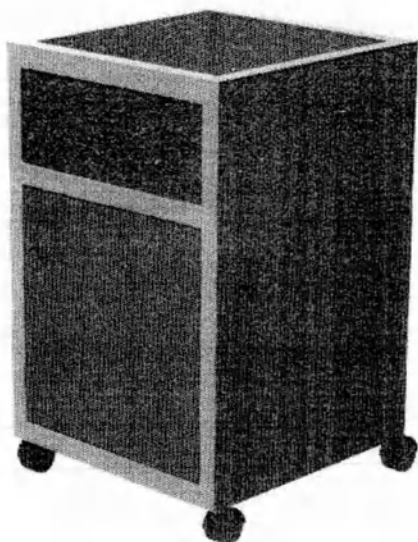

Внешний вид. Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100122;

Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100124



Внешний вид. Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100125;

Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100126




Внешний вид. Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками, артикул 100127;


Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 2, артикул 100128




Внешний вид. Шкаф медицинский навесной двустворчатый, артикул 100221

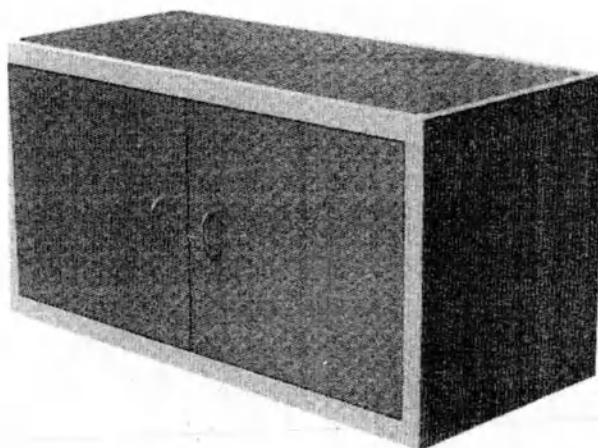


Внешний вид. Шкаф медицинский навесной двустворчатый остекленный, артикул 100222

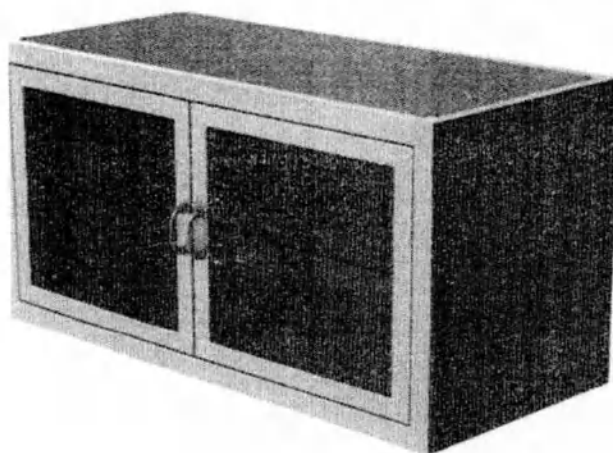

Внешний вид. Шкаф медицинский навесной двустворчатый с полкой, артикул 100223

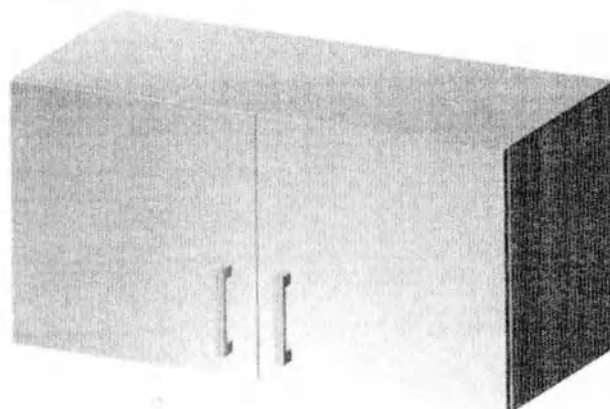

Внешний вид. Шкаф медицинский навесной двустворчатый остекленный с полкой, артикул 100224

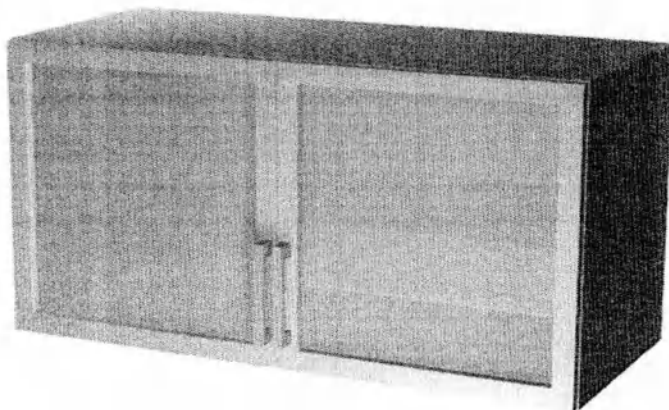

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Набор мебели медицинской для оснащения кабинета врача

_____ обозначение (модификация)

сериальный номер _____,
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией (ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022) и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
личная подпись

_____ расшифровка подписи

МП

год, месяц, число

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель: Индивидуальный предприниматель Костров Александр Анатольевич

Адрес:

Тел.

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Набор мебели медицинской для оснащения кабинета врача

по ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022

_____ обозначение (модификация)

Серийный № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия _____

б) Заполняет продавец

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняет исполнитель

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Исполнитель _____
подпись

Примечание
при оформлении
наименования
перемещаемых
вещей

А.И.

9.

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель Костров

Александр Анатольевич



А.А. Костров

«15» 01 2023 г.

Руководство по эксплуатации

Набор мебели медицинской для оснащения массажного кабинета

(выпущено впервые)

2023 г.

1. Наименование и область применения медицинского изделия.

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с основными техническими данными, устройством и правилами пользования медицинским изделием «**Набор мебели медицинской для оснащения массажного кабинета**», изготавливаемым по ТУ 32.50.30-001-018416623-2022 (далее по тексту - *Набор*) и предназначенным для оснащения массажного кабинета в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля.

Область применения - лечебно-профилактические учреждения любого профиля.

Набор выпускается в следующих вариантах комплектации:

1.	Набор мебели медицинской для оснащения массажного кабинета № 1, в составе:	1.3.1.1 1.3.1.1
1.1	Кушетка медицинская массажная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:	1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7
1.1.1	Кушетка медицинская массажная бесступенчатая, артикул 100267, в составе:	1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12
1.1.1.1	Лежак с рамой – 1 шт.;	
1.1.1.2	Стойка – 2 шт.;	
1.1.1.3	Стяжка – 1 шт.;	1.3.3
1.1.1.4	Болт М10х45 – 6 шт.;	1.3.3.1
1.1.1.5	Шайба 10 – 6 шт.;	1.3.3.2
1.1.1.6	Укосина – 4 шт.;	1.3.3.3
1.1.1.7	Винт М5х35 – 8 шт.;	1.3.3.4
1.1.1.8	Гайка М5 – 8 шт.;	1.3.3.5
1.1.1.9	Шайба 5 пружинная – 8 шт.;	1.3.3.6
1.1.1.10	Подставка одно- или двухступенчатая – 1 шт. (при необходимости);	1.3.3.7
1.1.2	Кушетка медицинская массажная бесступенчатая, с выемкой для лица, артикул 100268, в составе:	1.3.3.8 1.3.3.9 1.3.3.10 1.3.3.11 1.3.3.12
1.1.2.1	Лежак с рамой – 1 шт.;	
1.1.2.2	Стойка – 2 шт.;	
1.1.2.3	Стяжка – 1 шт.;	1.3.4
1.1.2.4	Болт М10х45 – 6 шт.;	
1.1.2.5	Шайба 10 – 6 шт.;	1.3.4.1
1.1.2.6	Укосина – 4 шт.;	1.3.4.2
1.1.2.7	Винт М5х35 – 8 шт.;	1.3.4.3
1.1.2.8	Гайка М5 – 8 шт.;	1.3.4.4
1.1.2.9	Шайба 5 пружинная – 8 шт.;	1.3.4.5
1.1.2.10	Подставка одно- или двухступенчатая – 1 шт. (при необходимости);	1.3.4.6 1.3.4.7 1.3.4.8 1.3.4.9 1.3.4.10 1.3.4.11
1.1.3	Кушетка медицинская массажная со ступенчатым подголовником, артикул 100269, в составе:	1.3.5
1.1.3.1	Ложе с каркасом и подголовником – 1 шт.;	
1.1.3.2	Ножка – 4 шт.;	
1.1.3.3	Гайка М10 – 8 шт.;	
1.1.3.4	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;	
1.1.3.5	Заглушка – 6 шт.	
1.2	Подставка для ног медицинская двухступенчатая, артикул 100283	
1.3	Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):	1.3.5.1 1.3.5.2 1.3.5.3 1.3.5.4 1.3.5.5 1.3.5.6 1.3.5.7 1.3.5.8 1.3.5.9 1.3.5.10 1.3.5.11
1.3.1	Ширма медицинская передвижная, 1 секция, артикул 100290, в составе:	1.3.6
1.3.1.1	Экран – 1 шт.;	
1.3.1.2	Стяжка – 2 шт.;	
1.3.1.3	Стойка одинарная – 1 шт.;	
1.3.1.4	Стойка двойная – 1 шт.;	
1.3.1.5	Колесо – 3 шт.;	
1.3.1.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;	
1.3.1.7	Болт М6х30 – 4 шт.;	
1.3.1.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;	
1.3.1.9	Болт М4х20 – 2 шт.;	
1.3.1.10	Шайба 4 – 2 шт.;	

ими да медици 416623 лечебн	1.3.1.11	Гайка М4 – 2 шт.;
	1.3.1.12	Заглушка МСК302/4 – 2 шт.;
	1.3.2	Ширма медицинская передвижная, 2 секции, артикул 100291, в составе:
	1.3.2.1	Экран – 1 шт.;
	1.3.2.2	Стяжка – 2 шт.;
	1.3.2.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
	1.3.2.4	Стойка двойная – 1 шт.;
	1.3.2.5	Колесо – 3 шт.;
	1.3.2.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
	1.3.2.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
	1.3.2.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
	1.3.2.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
	1.3.2.10	Шайба 4 – 2 шт.;
	1.3.2.11	Гайка М4 – 2 шт.;
	1.3.2.12	Заглушка МСК302/4 – 2 шт.;
ртикул	1.3.3	Ширма медицинская передвижная, 3 секции, артикул 100292, в составе:
	1.3.3.1	Экран – 1 шт.;
	1.3.3.2	Стяжка – 2 шт.;
	1.3.3.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
	1.3.3.4	Стойка двойная – 1 шт.;
	1.3.3.5	Колесо – 3 шт.;
	1.3.3.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
	1.3.3.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
	1.3.3.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
	1.3.3.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
	1.3.3.10	Шайба 4 – 2 шт.;
	1.3.3.11	Гайка М4 – 2 шт.;
	1.3.3.12	Заглушка МСК302/4 – 2 шт.;
269, в	1.3.4	Ширма медицинская передвижная, 1 секция, на плоских ножках, артикул 100293, в составе:
	1.3.4.1	Экран – 1 шт.;
	1.3.4.2	Стяжка – 2 шт.;
	1.3.4.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
	1.3.4.4	Стойка двойная – 1 шт.;
	1.3.4.5	Колесо – 3 шт.;
	1.3.4.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
	1.3.4.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
	1.3.4.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
	1.3.4.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
	1.3.4.10	Шайба 4 – 2 шт.;
	1.3.4.11	Гайка М4 – 2 шт.;
необ-	1.3.5	Ширма медицинская передвижная, 2 секции, на плоских ножках, артикул 100294, в составе:
	1.3.5.1	Экран – 1 шт.;
	1.3.5.2	Стяжка – 2 шт.;
	1.3.5.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
	1.3.5.4	Стойка двойная – 1 шт.;
	1.3.5.5	Колесо – 3 шт.;
	1.3.5.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
	1.3.5.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
	1.3.5.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
	1.3.5.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
	1.3.5.10	Шайба 4 – 2 шт.;
	1.3.5.11	Гайка М4 – 2 шт.;
	1.3.6	Ширма медицинская передвижная, 3 секции, на плоских ножках, артикул 100295, в составе:

1.3.6.1	Экран – 1 шт.;	1.4.4.6
1.3.6.2	Стяжка – 2 шт.;	1.4.4.7
1.3.6.3	Стойка одинарная – 1 шт.;	1.4.4.8
1.3.6.4	Стойка двойная – 1 шт.;	1.4.4.9
1.3.6.5	Колесо – 3 шт.;	1.4.4.1
1.3.6.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;	1.4.5
1.3.6.7	Болт М6х30 – 4 шт.;	1.4.5.1
1.3.6.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;	1.4.5.2
1.3.6.9	Болт М4х20 – 2 шт.;	1.4.5.3
1.3.6.10	Шайба 4 – 2 шт.;	1.4.5.4
1.3.6.11	Гайка М4 – 2 шт.;	1.4.5.5
1.4	Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):	1.4.5.6
1.4.1	Ширма медицинская стационарная, 1 секция, артикул 100284, в составе:	1.4.5.7
1.4.1.1	Экран – 1 шт.;	1.4.5.8
1.4.1.2	Стяжка – 2 шт.;	1.4.5.9
1.4.1.3	Стойка одинарная – 1 шт.;	1.4.5.1
1.4.1.4	Стойка двойная – 1 шт.;	1.4.6
1.4.1.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;	1.4.6.1
1.4.1.6	Болт М6х30 – 4 шт.;	1.4.6.2
1.4.1.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;	1.4.6.3
1.4.1.8	Болт М4х20 – 2 шт.;	1.4.6.4
1.4.1.9	Шайба 4 – 2 шт.;	1.4.6.5
1.4.1.10	Гайка М4 – 2 шт.;	1.4.6.6
1.4.1.11	Заглушка МСК302/4 – 5 шт.;	1.4.6.7
1.4.2	Ширма медицинская стационарная, 2 секции, артикул 100285, в составе:	1.4.6.8
1.4.2.1	Экран – 1 шт.;	1.4.6.9
1.4.2.2	Стяжка – 2 шт.;	1.4.6.10
1.4.2.3	Стойка одинарная – 1 шт.;	1.5
1.4.2.4	Стойка двойная – 1 шт.;	1.5.1
1.4.2.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;	1.5.1.1
1.4.2.6	Болт М6х30 – 4 шт.;	1.5.1.2
1.4.2.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;	1.5.1.3
1.4.2.8	Болт М4х20 – 2 шт.;	1.5.1.4
1.4.2.9	Шайба 4 – 2 шт.;	1.5.1.5
1.4.2.10	Гайка М4 – 2 шт.;	1.5.1.6
1.4.2.11	Заглушка МСК302/4 – 5 шт.;	1.5.1.7
1.4.3	Ширма медицинская стационарная, 3 секции, артикул 100286, в составе:	1.5.1.8
1.4.3.1	Экран – 1 шт.;	1.5.1.9
1.4.3.2	Стяжка – 2 шт.;	1.5.1.10
1.4.3.3	Стойка одинарная – 1 шт.;	1.5.1.11
1.4.3.4	Стойка двойная – 1 шт.;	1.5.1.12
1.4.3.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;	1.5.1.13
1.4.3.6	Болт М6х30 – 4 шт.;	1.5.1.14
1.4.3.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;	1.5.2
1.4.3.8	Болт М4х20 – 2 шт.;	1.5.2.1
1.4.3.9	Шайба 4 – 2 шт.;	1.5.2.2
1.4.3.10	Гайка М4 – 2 шт.;	1.5.2.3
1.4.3.11	Заглушка МСК302/4 – 5 шт.;	1.5.2.4
1.4.4	Ширма медицинская стационарная, 1 секция, на плоских ножках, артикул 100287, в составе:	1.5.2.5
1.4.4.1	Экран – 1 шт.;	1.5.2.6
1.4.4.2	Стяжка – 2 шт.;	1.5.2.7
1.4.4.3	Стойка одинарная – 1 шт.;	
1.4.4.4	Стойка двойная – 1 шт.;	
1.4.4.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;	

	1.4.4.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
	1.4.4.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
	1.4.4.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
	1.4.4.9	Шайба 4 – 2 шт.;
	1.4.4.10	Гайка М4 – 2 шт.;
	1.4.5	Ширма медицинская стационарная, 2 секции, на плоских ножках, артикул 100288, в составе:
	1.4.5.1	Экран – 1 шт.;
	1.4.5.2	Стяжка – 2 шт.;
	1.4.5.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
	1.4.5.4	Стойка двойная – 1 шт.;
необ-	1.4.5.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
	1.4.5.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
	1.4.5.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
	1.4.5.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
	1.4.5.9	Шайба 4 – 2 шт.;
	1.4.5.10	Гайка М4 – 2 шт.;
	1.4.6	Ширма медицинская стационарная, 3 секции, на плоских ножках, артикул 100289, в составе:
	1.4.6.1	Экран – 1 шт.;
	1.4.6.2	Стяжка – 2 шт.;
	1.4.6.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
	1.4.6.4	Стойка двойная – 1 шт.;
	1.4.6.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
	1.4.6.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
	1.4.6.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
	1.4.6.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
	1.4.6.9	Шайба 4 – 2 шт.;
	1.4.6.10	Гайка М4 – 2 шт.;
	1.5	Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
	1.5.1	Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями, артикул 100252, в составе:
	1.5.1.1	Крышка – 1 шт.;
	1.5.1.2	Стенка задняя – 1 шт.;
	1.5.1.3	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
	1.5.1.4	Короб нижний – 1 шт.;
	1.5.1.5	Лист нижний – 1 шт.;
	1.5.1.6	Дверь – 1 шт.;
	1.5.1.7	Полка – 2 шт.;
	1.5.1.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
	1.5.1.9	Винт М5х12 – 54 шт.;
	1.5.1.10	Шайба 5 – 54 шт.;
	1.5.1.11	Замок мебельный – 1 шт.;
	1.5.1.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 2/2 шт.;
	1.5.1.13	Саморез 3х17 – 2 шт.;
	1.5.1.14	Защелка магнитная – 1 шт.;
	1.5.2	Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, одностворчатый с двумя полками, артикул 100253, в составе:
0287, в	1.5.2.1	Крышка – 1 шт.;
	1.5.2.2	Стенка задняя – 1 шт.;
	1.5.2.3	Полка верхняя – 1 шт.;
	1.5.2.4	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
	1.5.2.5	Короб нижний – 1 шт.;
	1.5.2.6	Лист нижний – 1 шт.;
	1.5.2.7	Дверь – 2 шт.;

1.5.2.8	Простенок – 1 шт.;	2.1
1.5.2.9	Полка – 3 шт.;	2.1.1
1.5.2.10	Полкодержатель – 12 шт.;	2.1.1.1
1.5.2.11	Штанга – 1 шт.;	2.1.1.2
1.5.2.12	Штангодержатель – 2 шт.;	2.1.1.3
1.5.2.13	Регулируемая опора – 4 шт.;	2.1.1.4
1.5.2.14	Винт М5х12 – 67 шт.;	2.1.1.5
1.5.2.15	Шайба 5 – 67 шт.;	2.1.1.6
1.5.2.16	Замок мебельный – 2 шт.;	2.1.1.7
1.5.2.17	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;	2.1.1.8
1.5.3	Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями, широкий, артикул 100254, в составе:	2.1.1.9
1.5.3.1	Крышка – 1 шт.;	2.1.1.10
1.5.3.2	Стенка задняя – 1 шт.;	2.1.1.11
1.5.3.3	Полка верхняя – 1 шт.;	2.1.2
1.5.3.4	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;	2.1.2.1
1.5.3.5	Короб нижний – 1 шт.;	2.1.2.2
1.5.3.6	Лист нижний – 1 шт.;	2.1.2.3
1.5.3.7	Дверь – 2 шт.;	2.1.2.4
1.5.3.8	Простенок – 1 шт.;	2.1.2.5
1.5.3.9	Полка – 3 шт.;	2.1.2.6
1.5.3.10	Полкодержатель – 12 шт.;	2.1.2.7
1.5.3.11	Штанга – 1 шт.;	2.1.2.8
1.5.3.12	Штангодержатель – 2 шт.;	2.1.2.9
1.5.3.13	Регулируемая опора – 4 шт.;	2.1.2.10
1.5.3.14	Винт М5х12 – 67 шт.;	2.1.2.11
1.5.3.15	Шайба 5 – 67 шт.;	2.1.3
1.5.3.16	Замок мебельный – 2 шт.;	2.1.3.1
1.5.3.17	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;	2.1.3.2
1.6	Стол медицинский, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:	2.1.3.3
1.6.1	Стол медицинский 850х750х750 мм, артикул 100168, в составе:	2.1.3.4
1.6.1.1	Каркас- столешница – 1 шт.;	2.1.3.5
1.6.1.2	Ножка – 4 шт.;	2.1.3.6
1.6.1.3	Перемычка – 1 шт.;	2.1.3.7
1.6.1.4	Гайка М10 – 4 шт.;	2.1.3.8
1.6.1.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;	2.1.3.9
1.6.2	Стол медицинский 1000х750х750 мм, артикул 100169, в составе:	2.1.3.10
1.6.2.1	Каркас- столешница – 1 шт.;	2.1.3.11
1.6.2.2	Ножка – 4 шт.;	2.1.4
1.6.2.3	Перемычка – 1 шт.;	2.1.4.1
1.6.2.4	Гайка М10 – 4 шт.;	2.1.4.2
1.6.2.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;	2.1.4.3
1.6.3	Стол медицинский 850х750х750 мм №2, артикул 100170, в составе:	2.1.4.4
1.6.3.1	Каркас- столешница – 1 шт.;	2.1.4.5
1.6.3.2	Ножка – 4 шт.;	2.1.4.6
1.6.3.3	Перемычка – 1 шт.;	2.1.4.7
1.6.3.4	Гайка М10 – 4 шт.;	2.1.4.8
1.6.3.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;	2.1.4.9
1.6.4	Стол медицинский 1000х750х750 мм №2, артикул 100171, в составе:	2.1.4.10
1.6.4.1	Каркас- столешница – 1 шт.;	2.1.5
1.6.4.2	Ножка – 4 шт.;	2.1.5.1
1.6.4.3	Перемычка – 1 шт.;	2.1.5.2
1.6.4.4	Гайка М10 – 4 шт.;	2.1.5.3
1.6.4.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;	2.1.5.4
1.7	Руководство по эксплуатации – 1 шт.	2.1.5.5
2.	Набор мебели медицинской для оснащения массажного кабинета № 2, в составе:	

двумя	2.1	Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
	2.1.1	Ширма медицинская стационарная, 1 секция, артикул 100284, в составе:
	2.1.1.1	Экран – 1 шт.;
	2.1.1.2	Стяжка – 2 шт.;
	2.1.1.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
	2.1.1.4	Стойка двойная – 1 шт.;
	2.1.1.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
	2.1.1.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
	2.1.1.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
	2.1.1.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
	2.1.1.9	Шайба 4 – 2 шт.;
	2.1.1.10	Гайка М4 – 2 шт.;
	2.1.1.11	Заглушка МСК302/4 – 5 шт.;
	2.1.2	Ширма медицинская стационарная, 2 секции, артикул 100285, в составе:
	2.1.2.1	Экран – 1 шт.;
	2.1.2.2	Стяжка – 2 шт.;
	2.1.2.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
	2.1.2.4	Стойка двойная – 1 шт.;
	2.1.2.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
	2.1.2.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
	2.1.2.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
	2.1.2.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
	2.1.2.9	Шайба 4 – 2 шт.;
	2.1.2.10	Гайка М4 – 2 шт.;
	2.1.2.11	Заглушка МСК302/4 – 5 шт.;
	2.1.3	Ширма медицинская стационарная, 3 секции, артикул 100286, в составе:
	2.1.3.1	Экран – 1 шт.;
	2.1.3.2	Стяжка – 2 шт.;
	2.1.3.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
	2.1.3.4	Стойка двойная – 1 шт.;
	2.1.3.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
	2.1.3.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
	2.1.3.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
	2.1.3.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
	2.1.3.9	Шайба 4 – 2 шт.;
	2.1.3.10	Гайка М4 – 2 шт.;
	2.1.3.11	Заглушка МСК302/4 – 5 шт.;
	2.1.4	Ширма медицинская стационарная, 1 секция, на плоских ножках, артикул 100287, в составе:
	2.1.4.1	Экран – 1 шт.;
	2.1.4.2	Стяжка – 2 шт.;
	2.1.4.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
	2.1.4.4	Стойка двойная – 1 шт.;
	2.1.4.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
	2.1.4.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
	2.1.4.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
	2.1.4.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
	2.1.4.9	Шайба 4 – 2 шт.;
	2.1.4.10	Гайка М4 – 2 шт.;
	2.1.5	Ширма медицинская стационарная, 2 секции, на плоских ножках, артикул 100288, в составе:
	2.1.5.1	Экран – 1 шт.;
	2.1.5.2	Стяжка – 2 шт.;
	2.1.5.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
	2.1.5.4	Стойка двойная – 1 шт.;
	2.1.5.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;

2.1.5.6	Болт М6х30 – 4 шт.;	2.4.2.7
2.1.5.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;	2.4.2.8
2.1.5.8	Болт М4х20 – 2 шт.;	2.4.2.9
2.1.5.9	Шайба 4 – 2 шт.;	2.4.2.1
2.1.5.10	Гайка М4 – 2 шт.;	2.4.3
2.1.6	Ширма медицинская стационарная, 3 секции, на плоских ножках, артикул 100289, в составе:	2.4.3.
2.1.6.1	Экран – 1 шт.;	2.4.3.2
2.1.6.2	Стяжка – 2 шт.;	2.4.3.3
2.1.6.3	Стойка одинарная – 1 шт.;	2.4.3.4
2.1.6.4	Стойка двойная – 1 шт.;	2.4.3.5
2.1.6.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;	2.5
2.1.6.6	Болт М6х30 – 4 шт.;	2.5.1
2.1.6.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;	2.5.1.1
2.1.6.8	Болт М4х20 – 2 шт.;	2.5.1.2
2.1.6.9	Шайба 4 – 2 шт.;	2.5.1.3
2.1.6.10	Гайка М4 – 2 шт.;	2.5.1.4
2.2	Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):	2.5.1.5
2.2.1	Кушетка медицинская смотровая бесступенчатая, артикул 100265, в составе:	2.5.1.6
2.2.1.1	Ложе – 1 шт.;	2.5.1.7
2.2.1.2	Стойка левая – 1 шт.;	2.5.2
2.2.1.3	Стойка правая – 1 шт.;	2.5.2.1
2.2.1.4	Стяжка – 1 шт.;	2.5.2.2
2.2.1.5	Болт М10х45 – 6 шт.;	2.5.2.3
2.2.1.6	Шайба – 6 шт.;	2.5.2.4
2.2.1.7	Заглушка – 4 шт.;	2.5.2.5
2.2.2	Кушетка медицинская смотровая со ступенчатым подголовником, артикул 100266, в составе:	2.5.2.6
2.2.2.1	Ложе с каркасом и подголовником – 1 шт.;	2.5.2.7
2.2.2.2	Ножка – 4 шт.;	2.5.3
2.2.2.3	Гайка М10 – 8 шт.;	2.5.3.1
2.2.2.4	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;	2.5.3.2
2.2.2.5	Заглушка – 6 шт.;	2.5.3.3
2.3	Подставка для ног медицинская двухступенчатая, артикул 100283 (при необходимости)	2.5.3.4
2.4	Кушетка медицинская массажная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):	2.5.3.5
2.4.1	Кушетка медицинская массажная бесступенчатая, артикул 100267, в составе:	2.5.3.6
2.4.1.1	Лежак с рамой – 1 шт.;	2.5.3.7
2.4.1.2	Стойка – 2 шт.;	2.6
2.4.1.3	Стяжка – 1 шт.;	2.6.1
2.4.1.4	Болт М10х45 – 6 шт.;	2.6.1.1
2.4.1.5	Шайба 10 – 6 шт.;	2.6.1.2
2.4.1.6	Укосина – 4 шт.;	2.6.1.3
2.4.1.7	Винт М5х35 – 8 шт.;	2.6.1.4
2.4.1.8	Гайка М5 – 8 шт.;	2.6.1.5
2.4.1.9	Шайба 5 пружинная – 8 шт.;	2.6.1.6
2.4.1.10	Подставка одно- или двухступенчатая – 1 шт. (при необходимости);	2.6.1.7
2.4.2	Кушетка медицинская массажная бесступенчатая, с выемкой для лица, артикул 100268, в составе:	2.6.2
2.4.2.1	Лежак с рамой – 1 шт.;	2.6.2.1
2.4.2.2	Стойка – 2 шт.;	2.6.2.2
2.4.2.3	Стяжка – 1 шт.;	2.6.2.3
2.4.2.4	Болт М10х45 – 6 шт.;	2.6.2.4
2.4.2.5	Шайба 10 – 6 шт.;	2.6.2.5
2.4.2.6	Укосина – 4 шт.;	2.6.2.6
		2.6.2.7

	2.4.2.7	Винт М5х35 – 8 шт.;
	2.4.2.8	Гайка М5 – 8 шт.;
	2.4.2.9	Шайба 5 пружинная – 8 шт.;
	2.4.2.10	Подставка одно- или двухступенчатая – 1 шт. (при необходимости);
0289, в	2.4.3	Кушетка медицинская массажная со ступенчатым подголовником, артикул 100269, в составе:
	2.4.3.1	Ложке с каркасом и подголовником – 1 шт.;
	2.4.3.2	Ножка – 4 шт.;
	2.4.3.3	Гайка М10 – 8 шт.;
	2.4.3.4	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;
	2.4.3.5	Заглушка – 6 шт.
	2.5	Банкетка медицинская, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
	2.5.1	Банкетка медицинская 1150х400х440 мм, артикул 100273, в составе:
	2.5.1.1	Перемышка – 2 шт.;
	2.5.1.2	Сидение – 1 шт.;
	2.5.1.3	Стойка – 2 шт.;
и необ-	2.5.1.4	Шуруп М5 х 40 – 8 шт.;
	2.5.1.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;
	2.5.1.6	Болт М10 х 45 – 4 шт.;
	2.5.1.7	Заглушка – 4 шт.;
	2.5.2	Банкетка медицинская 1500х400х440 мм, артикул 100274, в составе:
	2.5.2.1	Перемышка – 2 шт.;
	2.5.2.2	Сидение – 1 шт.;
	2.5.2.3	Стойка – 2 шт.;
	2.5.2.4	Шуруп М5 х 40 – 10 шт.;
	2.5.2.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;
0266, в	2.5.2.6	Болт М10 х 45 – 4 шт.;
	2.5.2.7	Заглушка – 4 шт.;
	2.5.3	Банкетка медицинская 1500х400х440 мм № 2, артикул 100277 в составе:
	2.5.3.1	Перемышка – 2 шт.;
	2.5.3.2	Сидение – 1 шт.;
	2.5.3.3	Стойка – 2 шт.;
	2.5.3.4	Шуруп М5 х 40 – 10 шт.;
	2.5.3.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;
ности)	2.5.3.6	Болт М10 х 45 – 4 шт.;
и необ-	2.5.3.7	Заглушка – 4 шт.;
	2.6	Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
	2.6.1	Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х300х2000 мм, артикул 100255, в составе:
	2.6.1.1	Стойка – 4 шт.;
	2.6.1.2	Полка – 4 шт.;
	2.6.1.3	Подпятник – 4 шт.;
	2.6.1.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
	2.6.1.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
	2.6.1.6	Шайба 5 – 40 шт.;
	2.6.1.7	Гайка М5 – 40 шт.
	2.6.2	Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х400х2000 мм, артикул 100256, в составе:
ртикул	2.6.2.1	Стойка – 4 шт.;
	2.6.2.2	Полка – 4 шт.;
	2.6.2.3	Подпятник – 4 шт.;
	2.6.2.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
	2.6.2.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
	2.6.2.6	Шайба 5 – 40 шт.;
	2.6.2.7	Гайка М5 – 40 шт.

2.6.3	Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x500x2000 мм, артикул 100257, в составе:
2.6.3.1	Стойка – 4 шт.;
2.6.3.2	Полка – 4 шт.;
2.6.3.3	Подпятник – 4 шт.;
2.6.3.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
2.6.3.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
2.6.3.6	Шайба 5 – 40 шт.;
2.6.3.7	Гайка М5 – 40 шт.
2.6.4	Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x300x2000 мм, артикул 100258, в составе:
2.6.4.1	Стойка – 4 шт.;
2.6.4.2	Полка – 4 шт.;
2.6.4.3	Подпятник – 5 шт.;
2.6.4.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
2.6.4.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
2.6.4.6	Шайба 5 – 40 шт.;
2.6.4.7	Гайка М5 – 40 шт.
2.6.5	Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x400x2000 мм, артикул 100259, в составе:
2.6.5.1	Стойка – 4 шт.;
2.6.5.2	Полка – 4 шт.;
2.6.5.3	Подпятник – 5 шт.;
2.6.5.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
2.6.5.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
2.6.5.6	Шайба 5 – 40 шт.;
2.6.5.7	Гайка М5 – 40 шт.
2.6.6	Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x300x2000 мм, артикул 100260, в составе:
2.6.6.1	Стойка – 4 шт.;
2.6.6.2	Полка – 4 шт.;
2.6.6.3	Подпятник – 5 шт.;
2.6.6.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
2.6.6.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
2.6.6.6	Шайба 5 – 40 шт.;
2.6.6.7	Гайка М5 – 40 шт.
2.7	Руководство по эксплуатации – 1 шт.

2. Показания для применения медицинского изделия.

Стол медицинский предназначен для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов предназначен для размещения и хранения расходных материалов и инвентаря (например, медицинские массажные валики) применяемых при проведении различных процедур.

Шкаф-стеллаж медицинский предназначен для хранения медицинских расходных материалов.

Кушетка медицинская смотровая предназначена для размещения пациентов при осмотре и проведении процедур в медицинских кабинетах.

Кушетка медицинская массажная предназначена для проведения осмотра, массажа в качестве лечебных процедур всего тела, а также отдельных зон. Может проводиться лежа на спине, животе, полусидя, в зависимости от обрабатываемой зоны и здоровья пациента.

Банкетка медицинская предназначена для осмотра, в том числе первичного диагностического осмотра пациента, комфортного ожидания, для выделения зоны переодевания пациента (подготовка к процедуре).

Подставка для ног медицинская предназначена для правильного положения специалиста при проведении процедуры пациентам крупных размеров, поднимаясь на ступеньку. Также для безопасного спуска пациента с заболеваниями ОДА (опорно-двигательного аппарата) и др.

Ширма медицинская стационарная и ширма медицинская передвижная предназначена для организации защищенного от посторонних взглядов пространства при проведении осмотра пациентов в медицинских кабинетах.

3. Противопоказания для применения медицинского изделия.

- Не использовать изделие не по назначению.
- При эксплуатации изделия не допускается превышать допустимые нагрузки.
- Запрещается пользоваться сломанным изделием или изделием после истечения его срока службы.

4. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно данного руководства - побочные действия отсутствуют.

5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на упаковке.
- Не проводите по поверхности и не ударяйте их острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.
- Во избежание опрокидывания мебели запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно;
- При базировании изделия на полу должна быть обеспечена его устойчивость от опрокидывания, перекосов, раскачивания не допускается.

6. Технические характеристики медицинского изделия.

Габаритные размеры, масса изделий и конструктивные особенности соответствуют, приведенным в Приложении 1.

Двери открываются и закрываются плавно, без заедания и перекосов с усилием не более 10Н (1 кгс).

Ящики установлены на роликовых или шариковых направляющих и имеют устройство, предотвращающее их выпадение при выдвижении. Ящики выдвигаются плавно, без перекосов и заедания с усилием не более 10 (1 кгс).

Замки дверей и ящиков неподвижно и прочно закреплены и установлены так, что обеспечивает их легкое отпирание и запирание, а также плотное прилегание дверей и ящиков к корпусу.

Двери без замков имеют устройство, предотвращающее их самопроизвольное открывание.

Набор, в зависимости от модификации, установлен на колеса, либо регулируемые, либо нерегулируемые опоры.

Усилие включения тормоза колес не превышает 150 Н (15 кгс).

Усилие трогания с места не более, указанного в таблице 2.

Изделия при заторможенных колесных опорах с размещенной на них предельной рабочей нагрузкой не смещаются при приложении усилия, указанного в таблице 1.

Таблица 1

Масса изделия (см. Приложение 1)	Усилие трогания, не более, Н (кгс)	Усилие смещения при заторможенных колёсных опорах, не менее, Н (кгс)
Менее 50 кг	60 (6)	115 (11,5)
50-100 кг	125 (12,5)	235 (23,5)

Усилие перемещения Набора на колесах по горизонтальному бесшовному полу без нагрузки не превышает 50Н (5 кгс).

Набор стоит устойчиво на ровной горизонтальной поверхности пола, при этом зазор между полом и одной из опор не превышает 3 мм.

Элементы Набора выдерживают полуторакратную равномерно распределенную нагрузку. Величины нагрузок:

- на столешницу, полку тумбы из ЛДСП, МДФ не более 10 кг, на тумбу не более 25 кг;
- на столешницу, полку тумбы металлические не более 15 кг;
- на дно ящика из ЛДСП не более 5 кг;
- на дно ящика металлическое не более 10 кг;
- на полку тумбы, дно ящика не более 10 кг;
- на полку шкафа из ЛДСП не более 15 кг;
- на полку шкафа из стекла не более 5 кг;
- на полку шкафа металлическую не более 15 кг;
- на столешницу столов медицинских не более 80 кг;
- на ступеньки подставки не более 85 кг;
- на полку шкафа-стеллажа металлическую не более 100 кг, а на секцию не более 400 кг.
- кушетка должна выдерживать предельную рабочую нагрузку не менее 130 кг.

Влажность деталей из древесных материалов $(8 \pm 2) \%$.

Толщина полок из стекла соответствует ГОСТ 16371.

Гидравлическая система и пневмопривод герметичны. Не допускается наличие подтеков и бочек жидкости.

Самопроизвольное опускание элементов изделий с гидравлической системой/ пневмоприводом не допускается.

Усилие, прикладываемое к педали гидропривода не превышает 250 Н (25 кгс).

Усилие, прикладываемое к рукоятке пневмопружины не превышает 10 Н (1 кгс).

Поверхность Набора не имеет трещин, вмятин, следов коррозии, острых кромок, заусенцев, клеевых пятен, подтеков, разнооттеночности и других дефектов, ухудшающих ее товарный вид. Мягкая поверхность изделия не имеет морщин, складок, разрывов материала. Мягкая поверхность изделия не должна иметь морщин, складок, разрывов материала. Покрытия металлических деталей должны быть однотонными, без кратеров, пузырей, включений, отслаивания пленки и должны соответствовать требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

Металлические и неметаллические неорганические покрытия однотонные, без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и соответствуют требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I.

Лакокрасочные покрытия соответствуют ГОСТ 9.032 для условий эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104. Наружные поверхности имеют покрытия не ниже IV класса, внутренние — не ниже VI.

бочей
ица 1.
тор-
рах,
рузки
между
ку.

Наружные поверхности оборудования устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113, 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 или 1%-ным раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

При изготовлении Набора используются следующие материалы:

Стол медицинский изготавливается из следующих материалов: каркас: стальной профиль квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Столешница: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Кромочная лента: ПВХ серого цвета толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия (100168, 100169, 100170, 100171).

Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов изготавливается из следующих материалов: корпус, полки, дверь: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия. Регулируемые опоры из стали и пластика, производства ООО «ФМС», Россия. Врезной стальной мебельный замок с комплектом ключей, производства ООО «ФМС», Россия (100252, 100253, 100254).

Шкаф-стеллаж медицинский изготавливается из следующих материалов: каркас и полки: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия. Опоры: материал пластик и сталь производства ООО «ФМС» (100255, 100256, 100257, 100258, 100259, 100260).

Кушетка медицинская смотровая в зависимости от модификации изготавливается из следующих материалов:

ков ра-
приво-
сценев
ый ви
жност
детале
жны со
ловия

- каркас (усиленный): прямоугольный стальной профиль по ГОСТ 13663-86 производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Ложе: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия. Обивка: эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020). Чехол из винилискожи белого цвета, производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай. Регулировка наклона подголовника – механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100265);

сценев
ый ви
жност
детале
жны со
ловия

- каркас (усиленный): стальной профиль по ГОСТ 8639-82, ГОСТ 30245-2003, производства ООО «Феррум», Россия. Ножки: стальная опора Ø51 с приварным фланцем в сборе, производства ООО «ФМС», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Подголовник и ложе: фанера, производства ООО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», Россия; эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020); чехол из винилискожи бежевого цвета производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай. Механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100266).

ров, пу
вий эко

Кушетка медицинская массажная в зависимости от модификации изготавливается из:

Л 4.2 п
не ниж

- каркас (усиленный): прямоугольная стальная труба по ГОСТ 13663-86 производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Ложе: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия. Обивка: эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020). Чехол из винилискожи белого цвета, производства «Haining

Rainwing Textile Co., Ltd», Китай. Регулировка наклона подголовника - механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100267, 100168);

- каркас (усиленный): стальной профиль по ГОСТ 8639-82, ГОСТ 30245-2003, производства ООО «Феррум», Россия. Ножки: стальная опора Ø51 с приварным фланцем в сборе, производства ООО «ФМС», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Подголовник и ложе: фанера, производства ООО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», Россия; эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020); чехол из винилискожи бежевого цвета производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай. Механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100269).

Банкетка медицинская изготавливается из следующих материалов: каркас и ножки: тонкостенный стальной профиль по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Сидение: ДСП по ГОСТ 10632-2014, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Обивка: эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020). Чехол из винилискожи белого цвета, производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай" (100273, 100274, 100277).

Подставка для ног медицинская изготавливается из следующих материалов: каркас: прямая угловая стальная труба по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия. Обивка: эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020). Чехол из винилискожи белого цвета, производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай." (100283).

Ширма медицинская стационарная изготавливается из следующих материалов: каркас: стальная труба по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия; усиление: труба стальная квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО Выксунский металлургический завод, Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Полотно секций: пленка ПВХ, производства ООО «Трасса-С», Россия (ТУ 22.21.30-002-48184618-2022). Заглушки полипропиленовые, производства ООО «ФМС», Россия (100284, 100285, 100286, 100287, 100288, 100289).

Ширма медицинская передвижная изготавливается из следующих материалов: каркас: стальная труба круглого сечения по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия; усиление: труба стальная квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Полотно секций: пленка ПВХ, производства ООО «Трасса-С», Россия (ТУ 22.21.30-002-48184618-2022). Заглушки полипропиленовые, производства ООО «ФМС», Россия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия диаметр (100290, 100291, 100292, 100293, 100294, 100295).

7. Комплектность медицинского изделия.

Комплект поставки набора должен соответствовать указанному в Таблице 2 и Приложении

Таблица

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт
1	Набор мебели медицинской (в вариантах исполнения) *	1
2	Руководство по эксплуатации	1

* количество необходимых изделий входящих в состав набора и их модификации (артикулы), определяются по согласованию с заказчиком при заказе.

8. Подготовка к работе медицинского изделия.

Работу проводить только после изучения указаний, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной таре в нормальных климатических условиях (от +10°C до +35°C) не менее 2 ч.

Полученное изделие распакуйте, произведите внешний осмотр. Проверьте целостность покрытий и комплектацию. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод в эксплуатацию без согласования с предприятием-изготовителем не допускается.

Необходимо ознакомиться с устройством изделия и порядком сборки (для сборно-разборных изделий).

Произвести дезинфекцию изделия средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

9. Инструкция по сборке

100283 поставляется в собранном виде. Внешний вид приведен в Приложении 3.

Для сборно-разборных:

1. Распаковать изделие и проверить целостность покрытия.
2. Проверить комплектность крепежа (Приложение 2)
3. Осуществить сборку согласно руководству (Приложение 3).
4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

10. Техническое обслуживание медицинского изделия.

Изделия имеют простую, надежную конструкцию и не требуют специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости проверка и регулировка резьбовых соединений, петель и покрытий.

В случае ослабления резьбовых соединений и петель, необходимо их затянуть. Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять надежность крепления колес. При необходимости производить затяжку крепежа.

Не рекомендуется длительное использование изделия вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, а также под воздействием прямых солнечных лучей.

В течение всего срока пользования изделием обязательно производите периодическую дезинфекцию, сроки очередной дезинфекции согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

11. Маркировка медицинского изделия.

Маркировка изделий содержит:

- наименование, юридический адрес предприятия-изготовителя;
- адрес места производства;
- товарный знак (логотип) предприятия-изготовителя (при наличии);
- общее наименование изделия;
- наименование элемента набора;
- артикул;
- серийный номер;
- дата производства;
- гарантийный срок;
- срок службы;
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения;

- обозначение настоящих технических условий;
- символ «Предел температуры»;
- символ «Диапазон влажности».

12. Упаковка медицинского изделия.

Упаковка изделий обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Изделия упакованы в гофрокартон по ГОСТ Р 52901. Дополнительно допускается упаковка изделий в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

Эксплуатационная документация упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена вместе с изделием.

Съемная фурнитура упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена вместе с изделием.

Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании заперты на замок или при отсутствии замков, закреплены средствами, исключающими повреждение мебели.

13. Транспортирование и хранение медицинского изделия.

Набор транспортируется железнодорожными, водным, автомобильным и воздушным транспортом. Вид транспортного средства - крытый в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444, правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования - 5 ОЖ4 по ГОСТ 15150: при температуре от -50°C до +50°C относительной влажности не более 80%.

Условия хранения Набора на складах в упаковке предприятия-изготовителя - 1Л по ГОСТ 15150: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 80%. Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред.

14. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие Набора требованиям ТУ 32.50.30-001-018416623:2022 при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и выполнения требований Руководства по эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 12 месяцев с даты получения продукции конечным покупателем.

Срок службы 8 лет с момента ввода в эксплуатацию. За предельное состояние принимается такое состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация не допустима по условиям безопасности или нецелесообразна по технико-экономическим или функциональным показателям.

15. Порядок осуществления утилизации медицинского изделия.

Специальных требований по утилизации оборудования не предъявляется.

Изделия, не поступившие в эксплуатацию, по истечении срока хранения подлежат вторичной переработке, либо подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованиями санитарных правил Российской Федерации. Изделия после эксплуатации подлежат утилизации (уничтожению), согласно требованиям СанПиН 2.1.3684, как отходы класса А, а также в соответствии с инструкциями действующими в лечебном-профилактическом учреждении.

16. Сведения о производителе медицинского изделия.

ИП Костров Александр Анатольевич

Юридический адрес: 427105, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, с. Люкшуд

Лесная, д. 4

Адрес места производства: 426006, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, 135
Тел.: 8-800-700-01-89; E-mail: E-mail: infoRY@fm18.ru.

17. Изделия соответствуют требованиям национальных стандартов:

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»;
ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»;
ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность»;
ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;
ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2 Требования к обращению с животными»;
ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5 Исследование на цитотоксичность: методы in vitro»;
ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;
ГОСТ ISO 10993-12-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12 Приготовление проб и контрольные образцы»;
ГОСТ ISO 10993-23-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 23. Исследования раздражающего действия».

Габаритные размеры, масса изделий и конструктивные особенности

1. Стол медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ± 4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Стол медицинский 850х750х750 мм	100168	850х750х750	20	Четыре ножки, столешница из ЛДСП
Стол медицинский 1000х750х750 мм	100169	1000х750х750	25	Четыре ножки, столешница из ЛДСП
Стол медицинский 850х750х750 мм №2	100170	850х750х750	20	Четыре ножки, столешница из МДФ
Стол медицинский 1000х750х750 мм №2	100171	1000х750х750	25	Четыре ножки, столешница из МДФ

2. Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ± 4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями	100252	800х500х1800	60	Двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями, с полкой и перекладиной в первом отделении, с тремя полками во втором отделении, вентиляционные отверстия, замками
Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, одностворчатый с двумя полками	100253	500х500х1800	60	Одностворчатый с двумя полками, вентиляционные отверстия, замком
Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями, широкий	100254	800х500х1800	70	Двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями, с полкой и перекладиной в первом отделении, с тремя полками во втором отделении, вентиляционные отверстия, замками

3. Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ± 4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х300х2000 мм	100255	1000х300х2000	25	Четыре полки
Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х400х2000 мм	100256	1000х400х2000	30	Четыре полки

Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х500х2000 мм	100257	1000х500х2000	35	Четыре полки
Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х300х2000 мм	100258	1000х300х2000	25	Пять полок
Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х400х2000 мм	100259	1000х400х2000	30	Пять полок
Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х300х2000 мм	100260	1000х500х2000	35	Пять полок

4. Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Кушетка медицинская смотровая бесступенчатая	100265	1950х650х520	30	Угол наклона подголовника: от 0° до 45°, бесступенчатый
Кушетка медицинская смотровая со ступенчатым подголовником	100266	1970х665х550	30	Угол наклона подголовника: от 0° до 45°, механизмами Растомат

5. Кушетка медицинская массажная, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Кушетка медицинская массажная бесступенчатая	100267	1965х660х780	30	Угол наклона подголовника: от 0° до 45°, бесступенчатый
Кушетка медицинская массажная бесступенчатая, с выемкой для лица	100268	1965х660х780	30	Угол наклона подголовника: от 0° до 45°, бесступенчатый Выемка для лица в секции подголовника
Кушетка медицинская массажная со ступенчатым подголовником	100269	1965х660х780	32	Угол наклона подголовника: от 0° до 45°, механизмами Растомат

6. Банкетка медицинская, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Банкетка медицинская 1150х400х440 мм	100273	1150х400х440	11	-
Банкетка медицинская 1500х400х440 мм	100274	1520х400х440	14	-
Банкетка медицинская 1500х400х440 мм № 2	100277	1520х400х440	22	Разборная

7. Подставка для ног медицинская двухступенчатая:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Подставка для ног медицинская двухступенчатая	100283	410х440х360	5	Цельный каркас, двухступенчатая

8. Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Ширма медицинская стационарная, 1 секция	100284	790х400х1650	4 – одной секции	Без колес, 1 секция
Ширма медицинская стационарная, 2 секции	100285	790х400х1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес, 2 секции
Ширма медицинская стационарная, 3 секции	100286	790х400х1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес, 3 секции
Ширма медицинская стационарная, 1 секция, на плоских ножках	100287	800х400х1720	4 – одной секции	Без колес, 1 секция.
Ширма медицинская стационарная, 2 секции, на плоских ножках	100288	800х400х1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес, 2 секции.
Ширма медицинская стационарная, 3 секции, на плоских ножках	100289	800х400х1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес, 3 секции.

9. Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Ширма медицинская передвижная, 1 секция	100290	790х400х1650	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 1 секция
Ширма медицинская передвижная, 2 секции	100291	790х400х1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 2 секции
Ширма медицинская передвижная, 3 секции	100292	790х400х1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 3 секции
Ширма медицинская передвижная, 1 секция, на плоских ножках	100293	800х400х1720	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 1 секция.

Ширма медицинская передвижная, 2 секции, на плоских ножках	100294	800х400х1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 2 секции.
Ширма медицинская передвижная, 3 секции, на плоских ножках	100295	800х400х1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 3 секции.

Приложение 2

Комплектность крепежа изделий

1. Стол медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100168	100169	100170	100171
Каркас- столешница	1	1	1	1
Ножка	4	4	4	4
Перемычка	1	1	1	1
Гайка М10	4	4	4	4
Шайба пружинная 10	4	4	4	4

2. Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.		
	100252	100253	100254
Крышка	1	1	1
Стенка задняя	1	1	1
Полка верхняя	-	1	1
Стенка боковая (лев., прав.)	2	2	2
Короб нижний	1	1	1
Лист нижний	1	1	1
Дверь	1	2	2
Простенок	-	1	1
Полка	2	3	3
Полкодержатель	-	12	12
Штанга	-	1	1
Штангодержатель	-	2	2
Регулируемая опора	4	4	4
Винт М5х12	54	67	67
Шайба 5	54	67	67
Замок мебельный	1	2	2
Втулка ПВХ / Ось мебельная	2/2	4/4	4/4
Саморез 3х17	2	-	-
Защелка магнитная	1	-	-

3. Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.					
	100255	100256	100257	100258	100259	100260
Стойка	4	4	4	5	5	5
Полка	4	4	4	5	5	5
Подпятник	4	4	4	4	4	4
Уголок (стяжка)	16	16	16	16	16	16
Винт М5х12	40	40	40	48	48	48
Шайба 5	40	40	40	48	48	48
Гайка М5	40	40	40	48	48	48

4. Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.
	100265
Ложе	1
Стойка левая	1
Стойка правая	1
Стяжка	1
Болт М10х45	6
Шайба	6
Заглушка	4

Наименование	Количество, шт.
	100266
Ложе с каркасом и подголовником	1
Ножка	4
Гайка М10	8
Шайба пружинная 10	4
Заглушка	6

5. Кушетка медицинская массажная, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.	
	100267	100268
Лежак с рамой	1	1
Стойка	2	2
Стяжка	1	1
Болт М10х45	6	6
Шайба 10	6	6
Укосина	4	4
Винт М5х35	8	8
Гайка М5	8	8
Шайба 5 пружинная	8	8
Подставка одно- или двухступенчатая*	1	1

*поставляется по согласованию с заказчиком

Наименование	Количество, шт.
	100269
Ложе с каркасом и подголовником	1
Ножка	4
Гайка М10	8
Шайба пружинная 10	4
Заглушка	6

6. Банкетка медицинская, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.		
	100273	100274	100277

Перемычка	2	2	2
Сидение	1	1	1
Стойка	2	2	2
Шуруп М5 х 40	8	10	10
Шайба пружинная 10	4	4	4
Болт М10 х 45	4	4	4
Заглушка	4	4	4

7. Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.					
	100284	100285	100286	100287	100288	100289
Экран	1	1	1	1	1	1
Стяжка	2	2	2	2	2	2
Стойка одинарная	1	1	1	1	1	1
Стойка двойная	1	1	1	1	1	1
Колодка ПВХ, соединительная	4	4	4	4	4	4
Болт М6х30	4	4	4	4	4	4
Шайба 6 пружинная	4	4	4	4	4	4
Болт М4х20	2	2	2	2	2	2
Шайба 4	2	2	2	2	2	2
Гайка М4	2	2	2	2	2	2
Заглушка МСК302/4	5	5	5	-	-	-

8. Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.					
	100290	100291	100292	100293	100294	100295
Экран	1	1	1	1	1	1
Стяжка	2	2	2	2	2	2
Стойка одинарная	1	1	1	1	1	1
Стойка двойная	1	1	1	1	1	1
Колесо	3	3	3	3	3	3
Колодка, соединительная	4	4	4	4	4	4
Болт М6х30	4	4	4	4	4	4
Шайба 6 пружинная	4	4	4	4	4	4
Болт М4х20	2	2	2	2	2	2
Шайба 4	2	2	2	2	2	2
Гайка М4	2	2	2	2	2	2
Заглушка МСК302/4	2	2	2	-	-	-


Инструкция по сборке «Стол медицинский, в вариантах исполнения»:

Стол медицинский 850x750x750 мм, артикул 100168

Стол медицинский 1000x750x750 мм, артикул 100169

Стол медицинский 850x750x750 мм №2, артикул 100170


Стол медицинский 1000x750x750 мм №2, артикул 100171

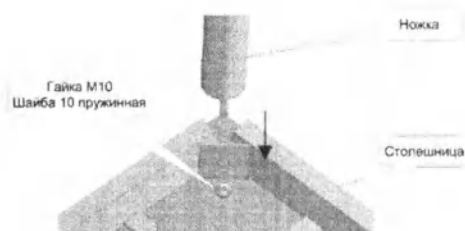


1. Распаковать комплектующие.
2. Установить ножки. Прикрутить их гайками М10 с шайбами 10 пружинными.

Инструкция по сборке «Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, в вариантах исполнения»:


Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями, артикул: 100252

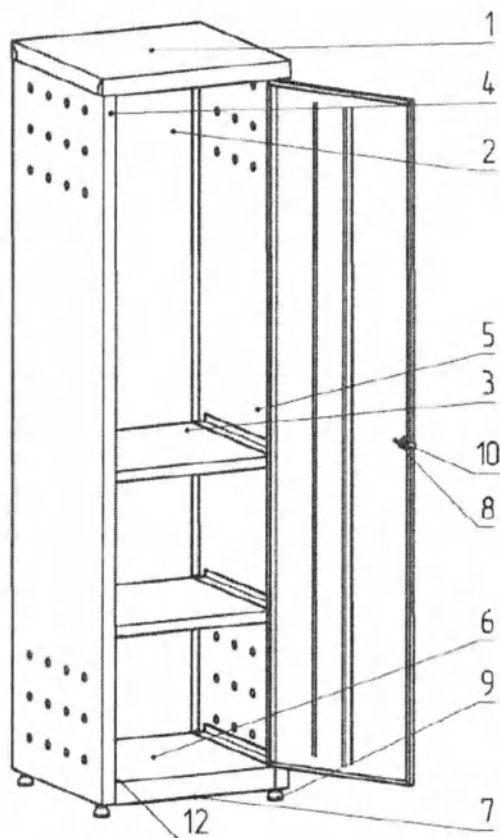

1. Соединить боковую стенку (4) с коробом нижним (5) и полками средними (3) при помощи винтов М5 и шайб.

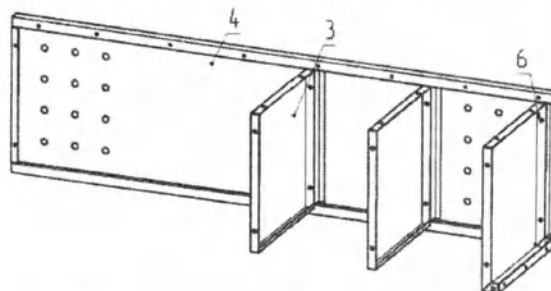

2. Соединить боковую стенку (5) с коробом нижним (6) и полками средними (3) при помощи винтов М5 и шайб.

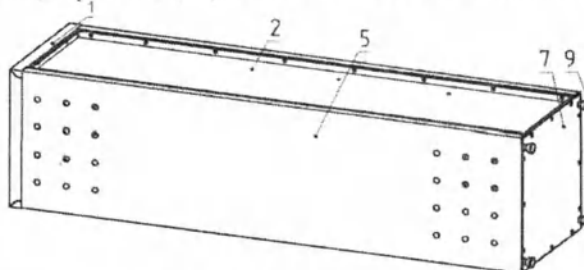

3. Прикрепить крышку (1) при помощи винтов М5 и шайб.

4. Прикрепить стенку заднюю (2) и лист нижний (7) к боковым стенкам и коробу нижнему при помощи винтов М5 и шайб. Прикрепить регулируемые опоры (9).

5. Прикрепить защелку магнитную (12) к коробу нижнему (6) саморезами.

6. Установить втулки (11) в места крепления двери.


7. Установить оси в короб нижний и в верхнее отверстие двери. Поставить дверь.

8. При помощи регулируемых опор выставить такое положение шкафа, при котором дверь открывается и закрывается свободно без заедания.


9. Навесить комплект приспособления при наличии на верхний край усилителя двери.

Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, одностворчатый с двумя полками, артикул: 100253,


Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями, широкий, артикул: 100254

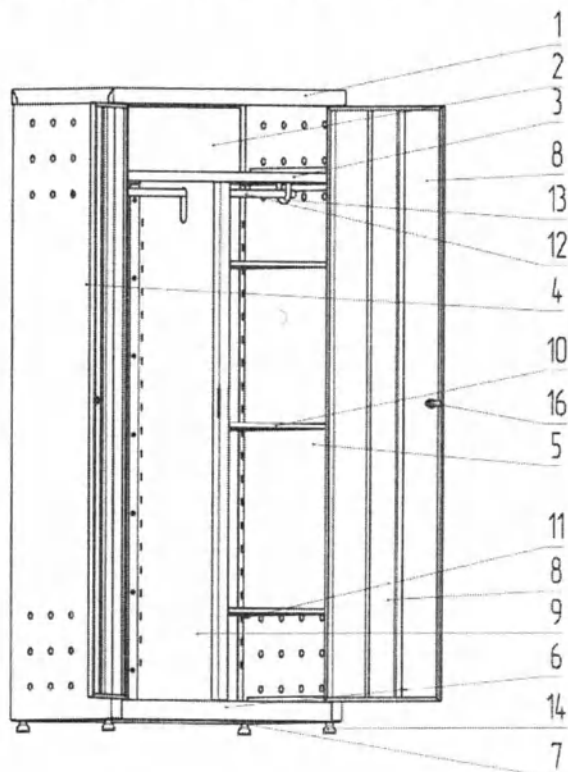

1. Соединить боковую стенку (4) с коробом нижним (6) и полкой верхней (3) при помощи винтов М5 и шайб.
2. Установить между коробом нижним (6) и полкой верхней (3) простенок (9). Закрепить винтами М5 и шайбами.

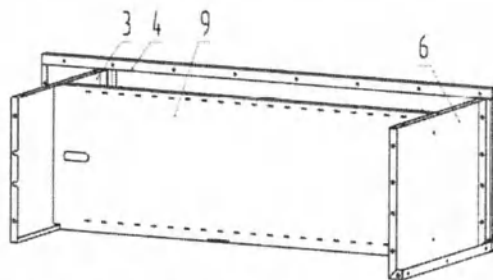

3. Соединить боковую стенку (5) с коробом нижним (6) и полкой верхней (3) при помощи винтов М5 и шайб.

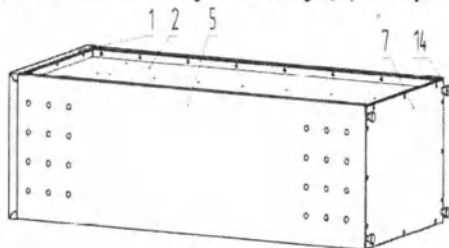

4. Прикрепить крышку (1) при помощи винтов М5 и шайб.
5. Прикрепить стенку заднюю (2) и лист нижний (7) к боковым стенкам, простенку и коробу нижнему при помощи винтов М5 и шайб. Прикрепить регулируемые опоры (14).
6. Установить штангодержатели (13) на боковые стенки. На штангодержатели установить штангу (12).
7. Установить втулки (15) в места крепления двери.

8. Установить оси в короб нижний и в верхнее отверстие двери. Поставить двери.
9. При помощи регулируемых опор выставить такое положение шкафа, при котором дверь открывается и закрывается свободно без заедания.

Инструкция по сборке «Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения»:

Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x300x2000 мм, артикул 100255;

Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x400x2000 мм, артикул 100256;



Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x500x2000 мм, артикул 100257;

Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x300x2000 мм, артикул 100258;

Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x400x2000 мм, артикул 100259;

Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x300x2000 мм, артикул 100260.


1. Положить стойки на горизонтальную поверхность, установить пластиковые подпятники.
2. Соединить стойки с полками с помощью винтов, шайб и гаек. Верхнюю и нижнюю полки соединять через стяжки (уголки).

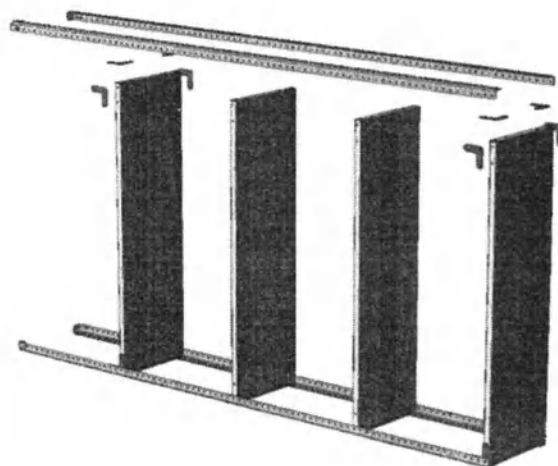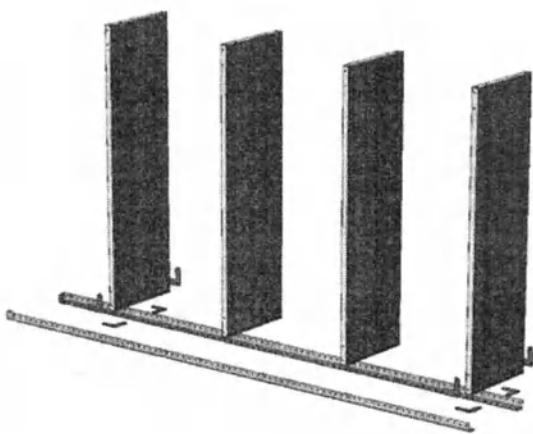

Инструкция по сборке «Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения»:

Кушетка медицинская смотровая бесступенчатая, артикул 100265

1. Соединить болтами раму и стойки, вставив упор в ушко на левой стойке. При этом ушко должно быть повернуто в сторону стойки.
2. Прикрепить болтами стяжку к стойкам.

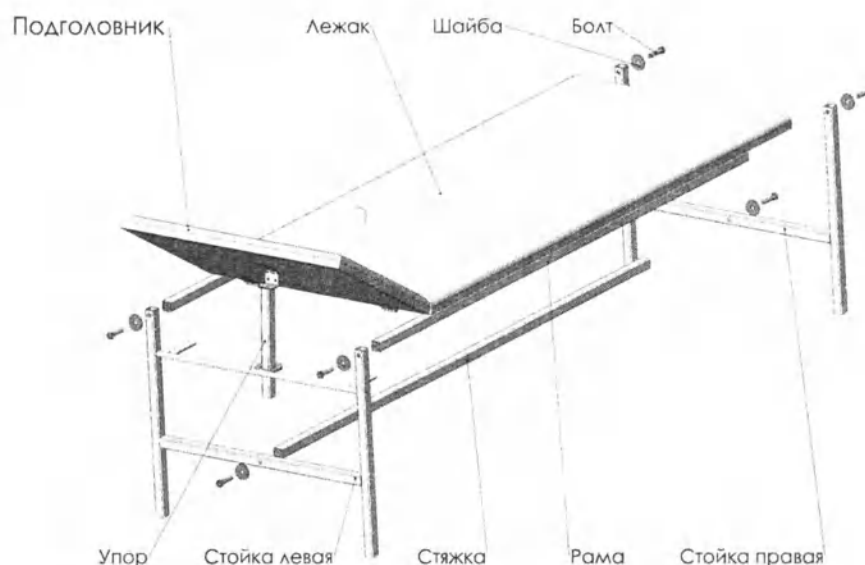

Кушетка медицинская смотровая со ступенчатым подголовником, артикул 100266

1. Прикрепить ножки к каркасу при помощи пары гаек М10 застопорив их пружинной шайбой 10.
2. Вставить в ножки заглушки.




Инструкция по сборке «Кушетка медицинская массажная, в вариантах исполнения»:

Кушетка медицинская массажная бесступенчатая, артикул 100267;

Кушетка медицинская массажная бесступенчатая, с выемкой для лица, артикул 100268;

Кушетка медицинская массажная со ступенчатым подголовником, артикул 100269.

- 1 Соединить болтами М10х45 раму и стойки, при этом упор необходимо вставить в ушко на левой стойке.
- 2 Прикрепить болтами М10х45 стяжку к стойкам.
- 3 При помощи винтов М5х35, гаек и шайб закрепить укосины к стойкам и раме.

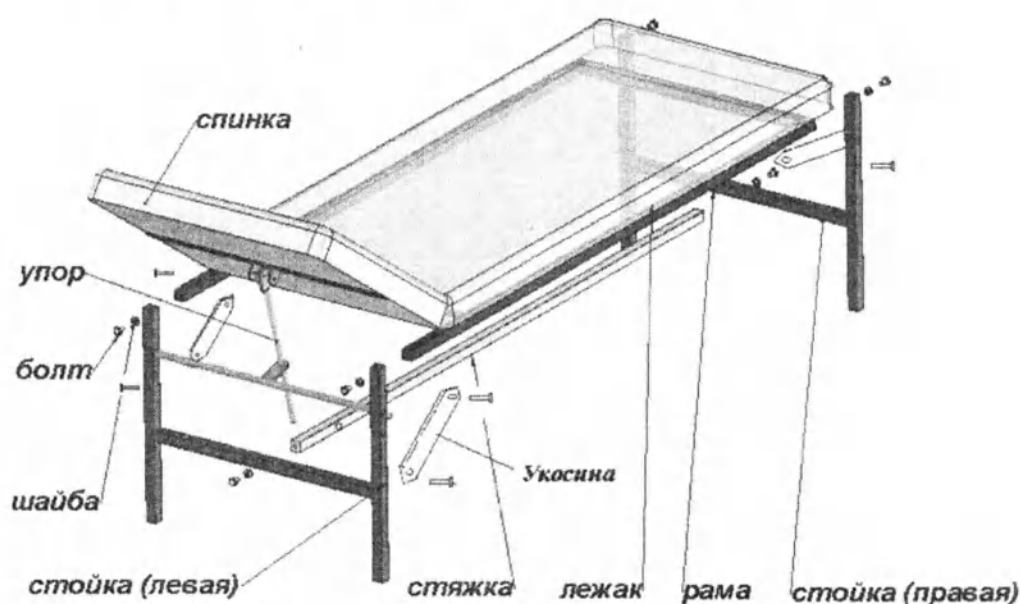


Инструкция по сборке «Банкетка медицинская, в вариантах исполнения»:

Банкетка медицинская 1150х400х440 мм, артикул 100273;

Банкетка медицинская 1500х400х440 мм, артикул 100274;

Банкетка медицинская 1500х400х440 мм № 2, артикул 100277;

1. Соединить стойки с перемычками в каркас при помощи болтов М10 и шайб пружинных 10.
2. Уложить сидение на гладкую, чистую поверхность. Сверху установить собранный каркас. Выставив по сторонам равномерный отступ, прикрепить сидение при помощи шурупов.
3. Установить заглушки в стойки.

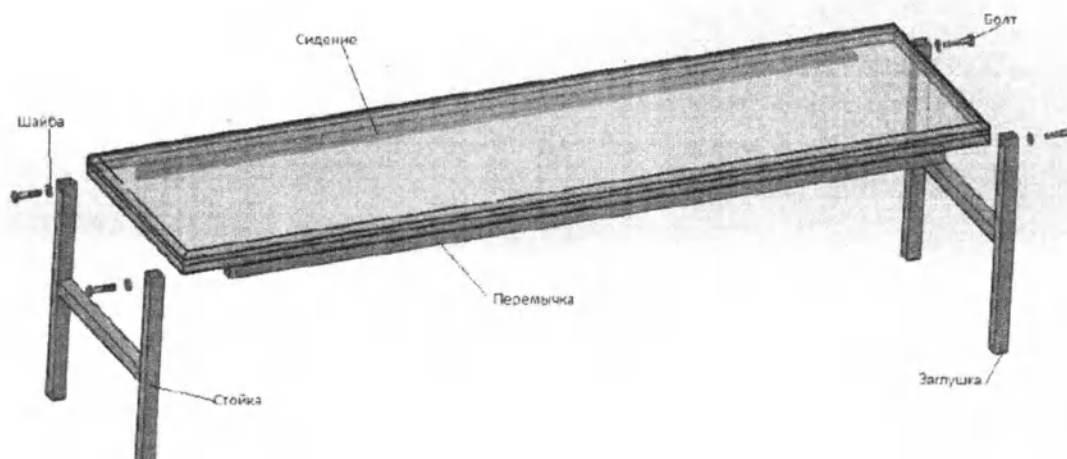

Инструкция по сборке «Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения» и «Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения»:

- Ширма медицинская стационарная, 1 секция, артикул 100284;*
- Ширма медицинская стационарная, 2 секции, артикул 100285;*
- Ширма медицинская стационарная, 3 секции, артикул 100286;*
- Ширма медицинская передвижная, 1 секция, артикул 100290;*
- Ширма медицинская передвижная, 2 секции, артикул 100291;*
- Ширма медицинская передвижная, 3 секции, артикул 100292*




1. Продеть стяжки через полотно экрана.
2. Прикрепить стяжки экрана к стойкам болтами.
3. В зависимости от исполнения прикрепить колеса или вставить заглушки.
4. Соединить секции при помощи соединительных колодок.
5. Вставить заглушки в стойки.

- Ширма медицинская стационарная, 1 секция, артикул 100287;*
- Ширма медицинская стационарная, 2 секции, артикул 100288;*
- Ширма медицинская стационарная, 3 секции, артикул 100289;*
- Ширма медицинская передвижная, 1 секция, артикул 100293;*

Ширма медицинская передвижная, 2 секции, артикул 100294;

Ширма медицинская передвижная, 3 секции, артикул 100295

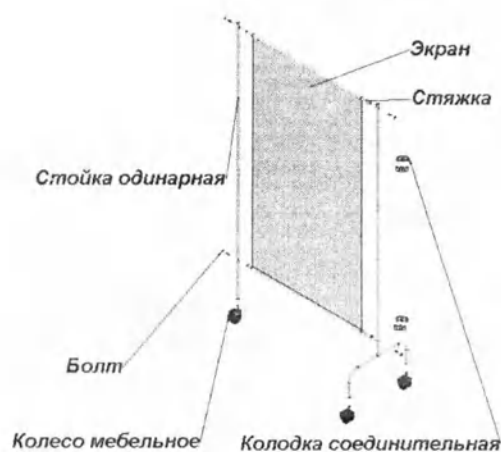

1. Продеть стяжки через полотно экрана.
2. Прикрепить стяжки экрана к стойкам болтами.
3. В зависимости от исполнения прикрепить колеса или вставить заглушки.
4. Соединить секции при помощи соединительных колодок.

ИЯ» И

Внешний вид. Подставка для ног медицинская двухступенчатая, артикул 100283



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Набор мебели медицинской для оснащения массажного кабинета _____

_____ обозначение (модификация)

сериальный номер _____,
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией (ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022) и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
личная подпись

_____ расшифровка подписи

МП

_____ год, месяц, число

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель: Индивидуальный предприниматель Костров Александр Анатольевич

Адрес:

Тел.

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Набор мебели медицинской для оснащения массажного кабинета _____

по ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022 _____

_____ обозначение (модификация)

Серийный № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия _____

б) Заполняет продавец

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняет исполнитель

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Исполнитель _____
подпись

Принято
32 (предыдущ
два
превышающих
мерой.
или коров А.А.


А.А.

10

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель Костров

Александр Анатольевич

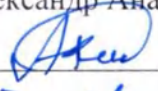 А.А. Костров

« 15 » 11 2023 г.

Руководство по эксплуатации

Набор мебели медицинской для оснащения поста медицинской сестры
(выпущено впервые)

1. Наименование и область применения медицинского изделия.

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с основными техническими данными, устройством и правилами пользования медицинским изделием «**Набор мебели медицинской для оснащения поста медицинской сестры**», изготавливаемым по ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022 (далее по тексту - *Набор*) и предназначенным для оснащения поста медицинской сестры в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля.

Область применения - лечебно-профилактические учреждения любого профиля.

Набор выпускается в следующей комплектации:

1.	Набор мебели медицинской для оснащения поста медицинской сестры № 1, в составе:
1.1	Стол медицинской сестры двухсекционный, артикул 100162, в составе:
1.1.1	Боковина надстройки – 2 шт.;
1.1.2	Крышка надстройки – 2 шт.;
1.1.3	Задняя стенка надстройки – 1 шт.;
1.1.4	Полка надстройки – 2 шт.;
1.1.5	Перегородка надстройки – 1 шт.;
1.1.6	Задняя стенка – 2 шт.;
1.1.7	Царга – 1 шт.;
1.1.8	Дно – 2 шт.;
1.1.9	Столешница – 2 шт.;
1.1.10	Порог – 1 шт.;
1.1.11	Боковина – 6 шт.;
1.1.12	Ящик – 3 шт.;
1.1.13	Полка – 2 шт.;
1.1.14	Дверь – 1 шт.;
1.1.15	Ручка – 4 шт.;
1.1.16	Стяжка-эксцентрик ТЕ 15 хром – 30 шт.;
1.1.17	Шток – 30 шт.;
1.1.18	Конфирмат – 44 шт.;
1.1.19	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.1.20	Шкант 8x30 – 100 шт.;
1.1.21	Шуруп 2А3-13 – 60 шт.;
1.1.22	Подпятник – 16 шт.;
1.1.23	Заглушка эксцентрик – 30 шт.;
1.1.24	Заглушка конфирмат – 44 шт.;
1.1.25	Петля – 2 шт.;
1.1.26	Ручка-скоба – 4 шт.;
1.1.27	Полкодержатель – 4 шт.;
1.1.28	Комплект направляющих – 3 шт.;
1.2	Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
1.2.1	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100118
1.2.2	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100119, в составе:
1.2.2.1	Стенка боковая – 2 шт.;
1.2.2.2	Дно, верх – 2 шт.;
1.2.2.3	Стенка задняя – 1 шт.;
1.2.2.4	Полка – 1 шт.;
1.2.2.5	Дверь – 1 шт.;
1.2.2.6	Стяжка-ТЕ 15 – 8 шт.;
1.2.2.7	Шток – 8 шт.;

1.2.2.8	Шкант 8х30 – 12 шт.;
1.2.2.9	Петля – 2 шт.;
1.2.2.10	Ручка-скоба – 1 шт.;
1.2.2.11	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
1.2.2.12	Заглушка эксцентрик – 8 шт.;
1.2.2.13	Колесо – 4 шт.;
1.2.3	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100120, в составе:
1.2.3.1	Стенка боковая – 2 шт.;
1.2.3.2	Дно, верх – 2 шт.;
1.2.3.3	Стенка задняя – 1 шт.;
1.2.3.4	Полка – 1 шт.;
1.2.3.5	Дверь – 1 шт.;
1.2.3.6	Стяжка-ТЕ 15 – 12 шт.;
1.2.3.7	Шток – 12 шт.;
1.2.3.8	Шкант 8х30 – 16 шт.;
1.2.3.9	Петля – 2 шт.;
1.2.3.10	Ручка-скоба – 2 шт.;
1.2.3.11	Шуруп 2А3-13 – 36 шт.;
1.2.3.12	Заглушка эксцентрик – 12 шт.;
1.2.3.13	Колесо – 4 шт.;
1.2.3.14	Компл.направляющих – 1 шт.;
1.2.4	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100121
1.2.5	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100122
1.2.6	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой № 2, артикул 100123
1.2.7	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100124
1.2.8	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100125
1.2.9	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100126
1.2.10	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками, артикул 100127
1.2.11	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 2, артикул 100128
1.2.12	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой № 2, артикул 100129, в составе:
1.2.12.1	Стенка боковая – 2 шт.;
1.2.12.2	Дно, верх – 2 шт.;
1.2.12.3	Стенка задняя – 1 шт.;
1.2.12.4	Полка – 1 шт.;
1.2.12.5	Дверь – 1 шт.;
1.2.12.6	Стяжка-ТЕ 15 – 8 шт.;
1.2.12.7	Шток – 8 шт.;
1.2.12.8	Шкант 8х30 – 8 шт.;
1.2.12.9	Петля – 2 шт.;
1.2.12.10	Ручка-скоба – 1 шт.;
1.2.12.11	Шуруп 2А3-13 – 26 шт.;
1.2.12.12	Заглушка эксцентрик – 8 шт.;
1.2.12.13	Колесо – 4 шт.;
1.2.12.14	Полкодержатель – 4 шт.;
1.2.13	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 3, артикул 100130, в составе:
1.2.13.1	Стенка боковая – 2 шт.;
1.2.13.2	Дно, верх – 2 шт.;

1.2.13.3	Стенка задняя – 1 шт.;
1.2.13.4	Ящик – 3 шт.;
1.2.13.5	Стяжка-ТЕ 15 – 20 шт.;
1.2.13.6	Шток – 20 шт.;
1.2.13.7	Шкант 8х30 – 32 шт.;
1.2.13.8	Ручка-скоба – 3 шт.;
1.2.13.9	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
1.2.13.10	Заглушка эксцентрик – 20 шт.;
1.2.13.11	Колесо – 4 шт.;
1.2.13.12	Компл.направляющих – 3 шт.;
1.3	Шкаф медицинский, в вариантах исполнения – 1 шт. из перечня:
1.3.1	Шкаф медицинский с двумя дверьми и пятью полками, с регулируемыми опорами, артикул 100219, в составе:
1.3.1.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.3.1.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.3.1.3	Дно, верх – 2 шт.;
1.3.1.4	Полка – 5 шт.;
1.3.1.5	Дверь – 2 шт.;
1.3.1.6	Конфирмат – 16 шт.;
1.3.1.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.3.1.8	Шкант 8х30 – 16 шт.;
1.3.1.9	Петля – 6 шт.;
1.3.1.10	Ручка-скоба – 2 шт.;
1.3.1.11	Шуруп 2А3-13 – 50 шт.;
1.3.1.12	Евровинт V6310 – 24 шт.;
1.3.1.13	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.3.1.14	Заглушка конфирмат – 16 шт.;
1.3.1.15	Полкодержатель – 8 шт.;
1.3.1.16	Профиль стыковочный – 1 шт.
1.3.2	Шкаф медицинский двустворчатый, с двумя вертикальными отделениями, с регулируемыми опорами, артикул 100220, в составе:
1.3.2.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.3.2.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.3.2.3	Дно, верх – 2 шт.;
1.3.2.4	Полка – 6 шт.;
1.3.2.5	Дверь – 2 шт.;
1.3.2.6	Штанга – 1 шт.;
1.3.2.7	Перегородка (стойка) – 1 шт.;
1.3.2.8	Конфирмат – 20 шт.;
1.3.2.9	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.3.2.10	Шкант 8х30 – 20 шт.;
1.3.2.11	Петля – 6 шт.;
1.3.2.12	Ручка-скоба – 2 шт.;
1.3.2.13	Шуруп 2А3-13 – 64 шт.;
1.3.2.14	Евровинт V6310 – 24 шт.;
1.3.2.15	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.3.2.16	Заглушка конфирмат – 20 шт.;
1.3.2.17	Полкодержатель – 16 шт.;
1.3.2.18	Штангодержатель – 2 шт.
1.3.3	Шкаф медицинский одностворчатый с открытой секцией, артикул 100233, в составе:
1.3.3.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.3.3.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.3.3.3	Дно, верх – 2 шт.;
1.3.3.4	Полка – 4 шт.;
1.3.3.5	Дверь – 1 шт.;

1.3.3.6	Конфирмат – 12 шт.;
1.3.3.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.3.3.8	Шкант 8х30 – 12 шт.;
1.3.3.9	Петля – 2 шт.;
1.3.3.10	Ручка-скоба большая – 1 шт.;
1.3.3.11	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
1.3.3.12	Евровинт V6310 – 8 шт.;
1.3.3.13	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.3.3.14	Полкодержатель – 12 шт.;
1.3.3.15	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
1.3.4	Шкаф медицинский одностворчатый с двумя дверцами, артикул 100234, в составе:
1.3.4.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.3.4.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.3.4.3	Дно, верх – 2 шт.;
1.3.4.4	Полка – 2 шт.;
1.3.4.5	Полка стеклянная – 2 шт.;
1.3.4.6	Дверь – 2 шт.;
1.3.4.7	Конфирмат – 12 шт.;
1.3.4.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.3.4.9	Шкант 8х30 – 12 шт.;
1.3.4.10	Петля – 2 шт.;
1.3.4.11	Петля с доводчиком – 2 шт.;
1.3.4.12	Ручка-скоба большая – 1 шт.;
1.3.4.13	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
1.3.4.14	Евровинт V6310 – 12 шт.;
1.3.4.15	Винт М5х12 – 4 шт.;
1.3.4.16	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.3.4.17	Полкодержатель – 4 шт.;
1.3.4.18	Полкодержатель под ст. – 8 шт.;
1.3.4.19	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
1.3.5	Шкаф медицинский двухсекционный, двухстворчатый с четырьмя дверцами, артикул 100235, в составе:
1.3.5.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.3.5.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.3.5.3	Дно, верх – 2 шт.;
1.3.5.4	Полка – 2 шт.;
1.3.5.5	Полка стеклянная – 2 шт.;
1.3.5.6	Дверь – 4 шт.;
1.3.5.7	Конфирмат – 12 шт.;
1.3.5.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.3.5.9	Шкант 8х30 – 12 шт.;
1.3.5.10	Петля – 4 шт.;
1.3.5.11	Петля с доводчиком – 2 шт.;
1.3.5.12	Ручка-скоба большая – 2 шт.;
1.3.5.13	Шуруп 2А3-13 – 50 шт.;
1.3.5.14	Евровинт V6310 – 24 шт.;
1.3.5.15	Винт М5х12 – 8 шт.;
1.3.5.16	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.3.5.17	Полкодержатель – 12 шт.;
1.3.5.18	Полкодержатель под ст. – 8 шт.;
1.3.5.19	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
1.4	Шкаф медицинский навесной, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
1.4.1	Шкаф медицинский навесной двухстворчатый, артикул 100221
1.4.2	Шкаф медицинский навесной двухстворчатый остекленный, артикул 100222

1.4.3	Шкаф медицинский навесной двустворчатый с полкой, артикул 100223
1.4.4	Шкаф медицинский навесной двустворчатый остекленный с полкой, артикул 100224
1.5	Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
1.5.1	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100236, в составе:
1.5.1.1	Стенка задняя – 1 шт.;
1.5.1.2	Полка – 2 шт.;
1.5.1.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
1.5.1.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
1.5.1.5	Короб – 3 шт.;
1.5.1.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.1.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.5.1.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
1.5.1.9	Саморез 4,2x13 – 25 шт.;
1.5.1.10	Саморез 3x17 – 4 шт.;
1.5.1.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
1.5.1.12	Замок мебельный – 1 шт.;
1.5.1.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
1.5.1.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
1.5.1.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
1.5.1.16	Полкодержатель – 16 шт.;
1.5.1.17	Гайка М5+Шайба 5 – 11 шт.;
1.5.1.18	Винт М5х12 – 16 шт.;
1.5.2	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100237, в составе:
1.5.2.1	Стенка задняя – 1 шт.;
1.5.2.2	Полка – 2 шт.;
1.5.2.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
1.5.2.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
1.5.2.5	Короб – 3 шт.;
1.5.2.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.2.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.5.2.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
1.5.2.9	Саморез 4,2x13 – 25 шт.;
1.5.2.10	Саморез 3x17 – 4 шт.;
1.5.2.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
1.5.2.12	Замок мебельный – 1 шт.;
1.5.2.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
1.5.2.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
1.5.2.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
1.5.2.16	Полкодержатель – 16 шт.;
1.5.2.17	Гайка М5+Шайба 5 – 11 шт.;
1.5.2.18	Винт М5х12 – 16 шт.;
1.5.3	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100238, в составе:
1.5.3.1	Стенка задняя – 2 шт.;
1.5.3.2	Полка – 2 шт.;
1.5.3.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
1.5.3.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
1.5.3.5	Короб – 3 шт.;
1.5.3.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.3.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.5.3.8	Полка стеклянная – 2 шт.;

1.5.3.9	Саморез 4.2x13 – 30 шт.;
1.5.3.10	Саморез 3x17 – 4 шт.;
1.5.3.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
1.5.3.12	Замок мебельный – 1 шт.;
1.5.3.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
1.5.3.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
1.5.3.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
1.5.3.16	Полкодержатель – 16 шт.;
1.5.3.17	Гайка М5+Шайба 5 – 12 шт.;
1.5.3.18	Винт М5х12 – 27 шт.;
1.5.4	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100239, в составе:
1.5.4.1	Стенка задняя – 2 шт.;
1.5.4.2	Полка – 2 шт.;
1.5.4.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
1.5.4.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
1.5.4.5	Короб – 3 шт.;
1.5.4.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.4.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.5.4.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
1.5.4.9	Саморез 4.2x13 – 30 шт.;
1.5.4.10	Саморез 3x17 – 4 шт.;
1.5.4.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
1.5.4.12	Замок мебельный – 1 шт.;
1.5.4.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
1.5.4.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
1.5.4.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
1.5.4.16	Полкодержатель – 16 шт.;
1.5.4.17	Гайка М5+Шайба 5 – 12 шт.;
1.5.4.18	Винт М5х12 – 27 шт.;
1.5.5	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100240, в составе:
1.5.5.1	Стенка задняя – 1 шт.;
1.5.5.2	Полка – 4 шт.;
1.5.5.3	Дверь – 2 шт.;
1.5.5.4	Короб – 3 шт.;
1.5.5.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.5.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.5.5.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
1.5.5.8	Шайба 5 – 26 шт.;
1.5.5.9	Саморез 3x17 – 4 шт.;
1.5.5.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
1.5.5.11	Замок мебельный – 2 шт.;
1.5.5.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
1.5.5.13	Полкодержатель – 16 шт.;
1.5.5.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
1.5.6	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100241, в составе:
1.5.6.1	Стенка задняя – 1 шт.;
1.5.6.2	Полка – 4 шт.;
1.5.6.3	Дверь – 2 шт.;
1.5.6.4	Короб – 3 шт.;

1.5.6.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.6.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.5.6.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
1.5.6.8	Шайба 5 – 26 шт.;
1.5.6.9	Саморез 3х17 – 4 шт.;
1.5.6.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
1.5.6.11	Замок мебельный – 2 шт.;
1.5.6.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
1.5.6.13	Полкодержатель – 16 шт.;
1.5.6.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
1.5.7	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100242, в составе:
1.5.7.1	Стенка задняя – 1 шт.;
1.5.7.2	Полка – 4 шт.;
1.5.7.3	Дверь – 2 шт.;
1.5.7.4	Короб – 3 шт.;
1.5.7.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.7.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.5.7.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
1.5.7.8	Шайба 5 – 26 шт.;
1.5.7.9	Саморез 3х17 – 4 шт.;
1.5.7.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
1.5.7.11	Замок мебельный – 2 шт.;
1.5.7.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
1.5.7.13	Полкодержатель – 16 шт.;
1.5.7.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
1.5.8	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100243, в составе:
1.5.8.1	Стенка задняя – 1 шт.;
1.5.8.2	Полка – 4 шт.;
1.5.8.3	Дверь – 2 шт.;
1.5.8.4	Короб – 3 шт.;
1.5.8.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.8.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.5.8.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
1.5.8.8	Шайба 5 – 26 шт.;
1.5.8.9	Саморез 3х17 – 4 шт.;
1.5.8.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
1.5.8.11	Замок мебельный – 2 шт.;
1.5.8.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
1.5.8.13	Полкодержатель – 16 шт.;
1.5.8.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
1.5.9	Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100244, в составе:
1.5.9.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.9.2	Полка – 2 шт.;
1.5.9.3	Дверь – 2 шт.;
1.5.9.4	Короб – 3 шт.;
1.5.9.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.9.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
1.5.9.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
1.5.9.8	Регулируемая опора – 4 шт.;

1.5.9.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
1.5.9.10	Гайка М5 – 25 шт.;
1.5.9.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
1.5.9.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
1.5.9.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
1.5.9.14	Замок мебельный – 1 шт.;
1.5.9.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
1.5.9.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
1.5.9.17	Петля для стекла – 4 шт.;
1.5.9.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
1.5.9.19	Полкодержатель – 16 шт.;
1.5.10	Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100245, в составе:
1.5.10.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.10.2	Полка – 2 шт.;
1.5.10.3	Дверь – 2 шт.;
1.5.10.4	Короб – 3 шт.;
1.5.10.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.10.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
1.5.10.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
1.5.10.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.5.10.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
1.5.10.10	Гайка М5 – 25 шт.;
1.5.10.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
1.5.10.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
1.5.10.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
1.5.10.14	Замок мебельный – 1 шт.;
1.5.10.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
1.5.10.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
1.5.10.17	Петля для стекла – 4 шт.;
1.5.10.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
1.5.10.19	Полкодержатель – 16 шт.;
1.5.11	Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100246, в составе:
1.5.11.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.11.2	Полка – 2 шт.;
1.5.11.3	Дверь – 2 шт.;
1.5.11.4	Короб – 3 шт.;
1.5.11.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.11.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
1.5.11.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
1.5.11.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.5.11.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
1.5.11.10	Гайка М5 – 25 шт.;
1.5.11.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
1.5.11.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
1.5.11.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
1.5.11.14	Замок мебельный – 1 шт.;
1.5.11.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
1.5.11.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
1.5.11.17	Петля для стекла – 4 шт.;
1.5.11.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);

1.5.11.19	Полкодержатель – 16 шт.;
1.5.12	Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100247, в составе:
1.5.12.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.12.2	Полка – 2 шт.;
1.5.12.3	Дверь – 2 шт.;
1.5.12.4	Короб – 3 шт.;
1.5.12.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.12.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
1.5.12.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
1.5.12.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.5.12.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
1.5.12.10	Гайка М5 – 25 шт.;
1.5.12.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
1.5.12.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
1.5.12.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
1.5.12.14	Замок мебельный – 1 шт.;
1.5.12.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
1.5.12.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
1.5.12.17	Петля для стекла – 4 шт.;
1.5.12.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
1.5.12.19	Полкодержатель – 16 шт.;
1.5.13	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100248, в составе:
1.5.13.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.13.2	Полка – 2 шт.;
1.5.13.3	Дверь – 2 шт.;
1.5.13.4	Короб – 3 шт.;
1.5.13.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.13.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
1.5.13.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
1.5.13.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.5.13.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
1.5.13.10	Гайка М5 – 25 шт.;
1.5.13.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
1.5.13.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
1.5.13.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
1.5.13.14	Замок мебельный – 1 шт.;
1.5.13.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
1.5.13.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
1.5.13.17	Петля для стекла – 4 шт.;
1.5.13.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
1.5.13.19	Полкодержатель – 16 шт.;
1.5.14	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100249, в составе:
1.5.14.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.14.2	Полка – 2 шт.;
1.5.14.3	Дверь – 2 шт.;
1.5.14.4	Короб – 3 шт.;
1.5.14.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.14.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
1.5.14.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
1.5.14.8	Регулируемая опора – 4 шт.;

1.5.14.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
1.5.14.10	Гайка М5 – 25 шт.;
1.5.14.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
1.5.14.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
1.5.14.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
1.5.14.14	Замок мебельный – 1 шт.;
1.5.14.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
1.5.14.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
1.5.14.17	Петля для стекла – 4 шт.;
1.5.14.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
1.5.14.1	Полкодержатель – 16 шт.;
1.5.15	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100250, в составе:
1.5.15.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.15.2	Полка – 2 шт.;
1.5.15.3	Дверь – 2 шт.;
1.5.15.4	Короб – 3 шт.;
1.5.15.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.15.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
1.5.15.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
1.5.15.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.5.15.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
1.5.15.10	Гайка М5 – 25 шт.;
1.5.15.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
1.5.15.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
1.5.15.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
1.5.15.14	Замок мебельный – 1 шт.;
1.5.15.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
1.5.15.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
1.5.15.17	Петля для стекла – 4 шт.;
1.5.15.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
1.5.15.19	Полкодержатель – 16 шт.;
1.5.16	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100251, в составе:
1.5.16.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.16.2	Полка – 2 шт.;
1.5.16.3	Дверь – 2 шт.;
1.5.16.4	Короб – 3 шт.;
1.5.16.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.5.16.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
1.5.16.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
1.5.16.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.5.16.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
1.5.16.10	Гайка М5 – 25 шт.;
1.5.16.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
1.5.16.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
1.5.16.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
1.5.16.14	Замок мебельный – 1 шт.;
1.5.16.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
1.5.16.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
1.5.16.17	Петля для стекла – 4 шт.;
1.5.16.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);

1.5.16.19	Полкодержатель – 16 шт.;
1.6	Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
1.6.1	Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х300х2000 мм, артикул 100255, в составе:
1.6.1.1	Стойка – 4 шт.;
1.6.1.2	Полка – 4 шт.;
1.6.1.3	Подпятник – 4 шт.;
1.6.1.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
1.6.1.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
1.6.1.6	Шайба 5 – 40 шт.;
1.6.1.7	Гайка М5 – 40 шт.
1.6.2	Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х400х2000 мм, артикул 100256, в составе:
1.6.2.1	Стойка – 4 шт.;
1.6.2.2	Полка – 4 шт.;
1.6.2.3	Подпятник – 4 шт.;
1.6.2.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
1.6.2.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
1.6.2.6	Шайба 5 – 40 шт.;
1.6.2.7	Гайка М5 – 40 шт.
1.6.3	Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х500х2000 мм, артикул 100257, в составе:
1.6.3.1	Стойка – 4 шт.;
1.6.3.2	Полка – 4 шт.;
1.6.3.3	Подпятник – 4 шт.;
1.6.3.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
1.6.3.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
1.6.3.6	Шайба 5 – 40 шт.;
1.6.3.7	Гайка М5 – 40 шт.
1.6.4	Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х300х2000 мм, артикул 100258, в составе:
1.6.4.1	Стойка – 4 шт.;
1.6.4.2	Полка – 4 шт.;
1.6.4.3	Подпятник – 5 шт.;
1.6.4.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
1.6.4.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
1.6.4.6	Шайба 5 – 40 шт.;
1.6.4.7	Гайка М5 – 40 шт.
1.6.5	Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х400х2000 мм, артикул 100259, в составе:
1.6.5.1	Стойка – 4 шт.;
1.6.5.2	Полка – 4 шт.;
1.6.5.3	Подпятник – 5 шт.;
1.6.5.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
1.6.5.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
1.6.5.6	Шайба 5 – 40 шт.;
1.6.5.7	Гайка М5 – 40 шт.
1.6.6	Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х300х2000 мм, артикул 100260, в составе:
1.6.6.1	Стойка – 4 шт.;
1.6.6.2	Полка – 4 шт.;
1.6.6.3	Подпятник – 5 шт.;
1.6.6.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
1.6.6.5	Винт М5х12 – 40 шт.;

1.6.6.6	Шайба 5 – 40 шт.;
1.6.6.7	Гайка М5 – 40 шт.
1.7	Руководство по эксплуатации – 1 шт.

2. Показания для применения медицинского изделия.

Тумба медицинская подкатная предназначена для размещения, хранения и перемещения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур различных изделий медицинского и лабораторного назначения и медикаментов.

Стол медицинской сестры предназначен для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Шкаф медицинский и шкаф медицинский навесной предназначен для организации хранения различных изделий медицинского и лабораторного назначения и медикаментов.

Шкаф для медикаментов предназначен для размещения и хранения медикаментов и приспособлений к ним, используемых при проведении процедур.

Шкаф-стеллаж медицинский предназначен для хранения медицинских расходных материалов.

3. Противопоказания для применения медицинского изделия.

- Не использовать изделие не по назначению.
- При эксплуатации изделия не допускается превышать допустимые нагрузки.
- Запрещается пользоваться сломанным изделием или изделием после истечения его срока службы.

4. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно данного руководства - побочные действия отсутствуют.

5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на упаковке.
- Не проводите по поверхности и не ударяйте их острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери и полки необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденную стеклодеталь;
- Во избежание опрокидывания мебели запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно;
- При базировании изделия на полу должна быть обеспечена его устойчивость от опрокидывания, перекосов, раскачивания не допускается.

6. Технические характеристики медицинского изделия.

Габаритные размеры, масса изделий и конструктивные особенности соответствуют, приведенным в Приложении 1.

Двери открываются и закрываются плавно, без заедания и перекосов с усилием не более 10Н (1 кгс).

Ящики установлены на роликовых или шариковых направляющих и имеют устройство, предотвращающее их выпадение при выдвижении. Ящики выдвигаются плавно, без перекосов и заедания с усилием не более 10 (1 кгс).

Замки дверей и ящиков неподвижно и прочно закреплены и установлены так, что обеспечивает их легкое отпирание и запирание, а также плотное прилегание дверей и ящиков к корпусу.

Двери без замков имеют устройство, предотвращающее их самопроизвольное открывание.

Набор, в зависимости от модификации, установлен на колеса, либо регулируемые, либо нерегулируемые опоры.

Усилие включения тормоза колес не превышает 150 Н (15 кгс).

Усилие трогания с места не более, указанного в таблице 2.

Изделия при заторможенных колесных опорах с размещенной на них предельной рабочей нагрузкой не смещаются при приложении усилия, указанного в таблице 1.

Таблица 1.

Масса изделия (см. Приложение 1)	Усилие трогания, не более, Н (кгс)	Усилие смещения при заторможенных колёсных опорах, не менее, Н (кгс)
Менее 50 кг	60 (6)	115 (11,5)
50-100 кг	125 (12,5)	235 (23,5)

Усилие перемещения Набора на колесах по горизонтальному бесшовному полу без нагрузки не превышает 50Н (5 кгс).

Набор стоит устойчиво на ровной горизонтальной поверхности пола, при этом зазор между полом и одной из опор не превышает 3 мм.

Элементы Набора выдерживают полуторакратную равномерно распределенную нагрузку.

Величины нагрузок:

- на столешницу, полку тумбы из ЛДСП, МДФ не более 10 кг, на тумбу не более 25 кг;
- на столешницу, полку тумбы металлические не более 15 кг;
- на дно ящика из ЛДСП не более 5 кг;
- на дно ящика металлическое не более 10 кг;
- на полку тумбы, дно ящика не более 10 кг;
- на полку шкафа из ЛДСП не более 15 кг;
- на полку шкафа из стекла не более 5 кг;
- на полку шкафа металлическую не более 15 кг;
- на столы медицинской сестры не более 80 кг;
- на полку шкафа-стеллажа металлическую не более 100 кг, а на секцию не более 400 кг.

Влажность деталей из древесных материалов $(8 \pm 2) \%$.

Толщина полок из стекла соответствует ГОСТ 16371.

Гидравлическая система и пневмопривод герметичны. Не допускается наличие подтеков рабочей жидкости.

Самопроизвольное опускание элементов изделий с гидравлической системой/ пневмоприводом не допускается.

Усилие, прикладываемое к педали гидропривода не превышает 250 Н (25 кгс).

Усилие, прикладываемое к рукоятке пневмопружины не превышает 10 Н (1 кгс).

Поверхность Набора не имеет трещин, вмятин, следов коррозии, острых кромок, заусенцев, клеевых пятен, подтеков, разнооттеночности и других дефектов, ухудшающих ее товарный вид. Мягкая поверхность изделия не имеет морщин, складок, разрывов материала. Мягкая поверхность изделия не должна иметь морщин, складок, разрывов материала. Покрытия металлических деталей должны быть однотонными, без кратеров, пузырей, включений, отслаивания пленки и должны соответствовать требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

Металлические и неметаллические неорганические покрытия однотонные, без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и соответствуют требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I.

Лакокрасочные покрытия соответствуют ГОСТ 9.032 для условий эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104. Наружные поверхности имеют покрытия не ниже IV класса, внутренние — не ниже VI.

Наружные поверхности оборудования устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113, 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 или 1%-ным раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

При изготовлении Набора используются следующие материалы:

Тумба медицинская подкатная изготавливается из следующих материалов:

- каркас: стальная труба по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия; корпус, дверь и ящик: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Ручки на двери и ящика: металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. (100118).

- каркас, ящик, дверь, полка из влагостойкой ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) белого цвета по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. Ручки на двери и ящика: металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. (100119, 100120, 100129, 100130);

- каркас: алюминиевый профиль, производства ООО «Алюмторг». Верх, низ и фасад - МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) белого цвета по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейted Вуд Индастри», Россия. Задняя и боковые стенки: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. Ручки на двери и ящика: металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. (100121, 100122, 100123, 100124, 100125, 100126, 100127, 100128).

Стол медицинской сестры изготавливается из следующих материалов:

- корпус стола изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс

эмиссии формальдегида Е1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Ручка на двери: металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай (100162).

Шкаф медицинский в зависимости от модификации изготавливается из:

- корпус / полки: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг». Дверь / фасад: МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида Е1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Кромочная лента: ПВХ толщиной 2 мм серого цвета, производства Surteco GmbH, Германия. Петли стальные с доводчиком производства ООО «ФМС», Россия. Ручка на двери модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Регулируемые опоры со штырем М10, материал сталь и пластик, производства ООО «ФМС», Россия (100219, 100220);

- корпус: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) мм по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг». Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Полки и фасад нижнего отделения: МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида Е1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Ручки на дверях: модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Петли с доводчиком производства ООО «ФМС», материал сталь, пластик, Россия. Регулируемые опоры со штырем М10, материал сталь и пластик, производства ООО «ФМС», Россия (100233);

- корпус: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг». Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Нижний фасад: МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида Е1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Ручки на дверях: модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Петли с доводчиком производства ООО «ФМС», материал сталь, пластик, Россия. Регулируемые опоры со штырем М10, материал сталь и пластик производства ООО «ФМС», Россия. Верхняя дверь: закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014 производства ООО «Производственная база «Август», Россия (100234);

- корпус и полки: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) мм серого цвета по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Фасады (двери нижние): МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида Е1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) серого цвета по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Кромочная лента: ПВХ толщиной 2 мм серого цвета, производства Surteco GmbH, Германия. Петли с доводчиком (для дверей из МДФ): материал – сталь, пластик, производства ООО «ФМС», Россия. Двери верхние: закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014, производства ООО «Производственная база «Август», Россия. Алюминиевый профиль, производства ООО «Алюмторг», Россия. Петли с

доводчиком (для дверей из стекла): сталь, производства ООО «ФМС», Россия. Ручки на дверях: модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Регулируемые опоры со штырем M10, материал сталь и пластик, производства ООО «ФМС», Россия (100235).

Шкаф медицинский навесной, в зависимости от модификации изготавливается из:

- каркас: алюминиевый профиль производства ООО «Алюмторг», Россия. Корпус и полка: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг». Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surtesco GmbH, Германия. Петли стальные производства ООО «ФМС», Россия. Ручки на дверях: стальные, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай (100221, 100223);

- каркас: алюминиевый профиль, производства ООО «Алюмторг», Россия. Корпус: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) белого цвета по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surtesco GmbH, Германия. Дверь и полка: закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014, производства ООО «Производственная база «Август», Россия. Ручки на дверях: стальные, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай (100222, 100224).

Шкаф для медикаментов, в зависимости от модификации изготавливается из:

- каркас, двери и полки: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех». Верхняя секция и полки: закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014, производства ООО «Производственная база «Август», Россия. Ручки на дверях модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Петли с доводчиком (для стекла): стальные, производства ООО «ФМС», Россия. Металлические пластинчатые полкодержатели, производства ООО «ФМС», Россия. Опоры: из стали и пластика, производства ООО «ФМС», Россия (100236, 100237, 100238, 100239, 100244, 100245, 100246, 100247);

- каркас, двери и полки: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех». Металлические пластинчатые полкодержатели, производства ООО «ФМС», Россия. Опоры: из стали и пластика, производства ООО «ФМС», Россия (100240, 100241, 100242, 100243, 100248, 100251, 100249, 100250).

Шкаф-стеллаж медицинский изготавливается из следующих материалов: каркас и полки: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех». Россия. Опоры: материал пластик и сталь производства ООО «ФМС» (100255, 100256, 100257, 100258, 100259, 100260).

7. Комплектность медицинского изделия.

Комплект поставки набора должен соответствовать указанному в Таблице 2 и Приложении 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Набор мебели медицинской (в вариантах исполнения) *	1
2	Руководство по эксплуатации	1

* количество необходимых изделий входящих в состав набора и их модификации (артикулы), определяются по согласованию с заказчиком при заказе.

8. Подготовка к работе медицинского изделия.

Работу проводить только после изучения указаний, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной таре в нормальных климатических условиях (от +10°C до +35°C) не менее 2 ч.

Полученное изделие распакуйте, произведите внешний осмотр. Проверьте целостность покрытий и комплектацию. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод в эксплуатацию без согласования с предприятием-изготовителем не допускается.

Необходимо ознакомиться с устройством изделия и порядком сборки (для сборно-разборных изделий).

Произвести дезинфекцию изделия средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

9. Инструкция по сборке

1C0118, 100121, 100123, 100122, 100124, 100125, 100126, 100127, 100128, 100221, 100222, 100223, 100224 поставляются в собранном виде. Внешний вид приведен в Приложении 3.

Для сборно-разборных:

1. Распаковать изделие и проверить целостность покрытия.
2. Проверить комплектность крепежа (Приложение 2)
3. Осуществить сборку согласно руководству (Приложение 3).
4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

10. Техническое обслуживание медицинского изделия.

Изделия имеют простую, надежную конструкцию и не требуют специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости проверка и регулировка резьбовых соединений, петель и покрытий.

В случае ослабления резьбовых соединений и петель, необходимо их затянуть. Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять надежность крепления колес. При необходимости производить затяжку крепежа.

Не рекомендуется длительное использование изделия вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, а также под воздействием прямых солнечных лучей.

В течение всего срока пользования изделием обязательно производите периодическую дезинфекцию, сроки очередной дезинфекции согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

11. Маркировка медицинского изделия.

Маркировка изделий содержит:

- наименование, юридический адрес предприятия-изготовителя;
- адрес места производства;
- товарный знак (логотип) предприятия-изготовителя (при наличии);
- общее наименование изделия;
- наименование элемента набора;
- артикул;
- серийный номер;

- дата производства;
- гарантийный срок;
- срок службы;
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения;
- обозначение настоящих технических условий;
- символ «Предел температуры»;
- символ «Диапазон влажности».

12. Упаковка медицинского изделия.

Упаковка изделий обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Изделия упакованы в гофрокартон по ГОСТ Р 52901. Дополнительно допускается упаковка изделий в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

Эксплуатационная документация упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена вместе с изделием.

Съемная фурнитура упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена вместе с изделием.

Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании заперты на замок или при отсутствии замков, закреплены средствами, исключающими повреждение мебели.

13. Транспортирование и хранение медицинского изделия.

Набор транспортируется железнодорожными, водным, автомобильным и воздушным транспортом. Вид транспортного средства - крытый в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования - 5 ОЖ4 по ГОСТ 15150: при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Условия хранения Набора на складах в упаковке предприятия-изготовителя - 1Л по ГОСТ 15150: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 80%. Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред.

14. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие Набора требованиям ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022 при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и выполнения требований Руководства по эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным покупателем.

Срок службы 8 лет с момента ввода в эксплуатацию. За предельное состояние принимается такое состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация не допустима по условиям безопасности или нецелесообразна по технико-экономическим или функциональным показателям.

15. Порядок осуществления утилизации медицинского изделия.

Специальных требований по утилизации оборудования не предъявляется.

Изделия, не поступившие в эксплуатацию, по истечении срока хранения подлежат вторичной переработке, либо подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованиями санитарных правил Российской Федерации. Изделия после эксплуатации подлежат утилизации (уничтожению), согласно требованиям СанПиН 2.1.3684, как отходы класса А, а также в соответствии с инструкциями действующими в лечебном-профилактическом учреждении.

16. Сведения о производителе медицинского изделия.

ИП Костров Александр Анатольевич

Юридический адрес: 427105, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, с. Люкшудья, ул. Лесная, д. 4

Адрес места производства: 426006, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, 135

Тел.: 8-800-700-01-89; E-mail: infoRY@fm18.ru.

17. Изделия соответствуют требованиям национальных стандартов:

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации.

представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность»;

ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2 Требования к обращению с животными»

ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5 Исследование на цитотоксичность: методы in vitro»;

ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

ГОСТ ISO 10993-12-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12 Приготовление проб и контрольные образцы».

ГОСТ ISO 10993-23-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 23. Исследования раздражающего действия».

Габаритные размеры, масса изделий и конструктивные особенности

1. Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой	100118	440x450x850	20	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, на колесах
Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой	100119	430x450x660	20	С верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, на колесах
Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой	100120	430x450x660	20	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, на колесах
Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой	100121	430x430x660	20	С верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП
Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой	100122	430x430x660	20	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП
Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой № 2	100123	430x430x660	20	С верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП и МДФ
Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой	100124	430x430x660	20	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП и МДФ
Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой	100125	430x430x660	20	С одним отделением с дверкой и полкой, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП
Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой	100126	430x430x660	20	С одним отделением с дверкой и полкой, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП и МДФ

Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками	100127	430x430x660	25	С тремя выдвижными ящиками, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП
Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 2	100128	430x430x660	25	С тремя выдвижными ящиками, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП и МДФ
Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой № 2	100129	430x450x660	20	С одним отделением с дверкой и полкой, на колесах
Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 3	100130	430x450x660	30	С тремя выдвижными ящиками, на колесах

2. Стол медицинской сестры двухсекционный:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Стол медицинской сестры двухсекционный	100162	1500x1500x1200, высота от пола до столешницы 750	90	Двухсекционный, первая секция — стол с тумбой с тремя ящиками и надстройкой с четырьмя отделениями, вторая секция — приставной стол с тумбой с дверкой и открытой нишей

3. Шкаф медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Шкаф медицинский с двумя дверьми и пятью полками, с регулируемыми опорами	100219	860x460x1950	75	Односекционный, двустворчатый, с пятью полками, на опорах
Шкаф медицинский двустворчатый, с двумя вертикальными отделениями, с регулируемыми опорами	100220	860x460x1950	80	Двустворчатый, с двумя вертикальными отделениями, с полкой и перекладиной в первом отделении, с пятью полками во втором отделении, на опорах
Шкаф медицинский одностворчатый с открытой секцией	100233	450x460x1950	35	Двухсекционный, одностворчатый, с двумя открытыми полками в верхней секции, одной полкой в нижней секции, на опорах

Шкаф медицинский одностворчатый с двумя дверцами	100234	450x460x1950	35	Двухсекционный, одностворчатый, с двумя полками в верхней секции, с одной полкой в нижней секции, на опорах
Шкаф медицинский двухсекционный, двустворчатый с четырьмя дверцами	100235	860x460x1950	74	Двухсекционный, двустворчатый, с двумя полками в верхней секции, одной полкой в нижней секции, на опорах

4. Шкаф медицинский навесной, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ± 4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Шкаф медицинский навесной двустворчатый	100221	860x380x450	20	Навесной, двустворчатый, с полкой, каркасный с заполнением ЛДСП
Шкаф медицинский навесной двустворчатый остекленный	100222	860x380x450	20	Навесной, двустворчатый остекленный, с полкой, каркасный с заполнением ЛДСП
Шкаф медицинский навесной двустворчатый с полкой	100223	860x380x450	20	Навесной, двустворчатый, с полкой
Шкаф медицинский навесной двустворчатый остекленный с полкой	100224	860x380x450	20	Навесной, двустворчатый остекленный, с полкой

5. Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ± 4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией	100236	570x320x1655	32	Двухсекционный, одностворчатый, со стеклянными полками и стеклянной дверкой в верхней секции, металлическими полками и дверкой в нижней секции
Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией №2	100237	570x320x1655	38	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из стекла Нижняя секция дверь и две полки из металла

Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный	100238	600x400x1750	38	Одна открытая секция, вторая закрытая. Количество полок 4 Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из стекла. Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2	100239	600x400x1750	45	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из стекла. Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двухсекционный. одностворчатый, с металлическими полками и дверками	100240	570x320x1655	27	двухсекционный. одностворчатый, с металлическими полками и дверками в секциях
Шкаф для медикаментов двухсекционный. одностворчатый, с металлическими полками и дверками №2	100241	570x320x1655	36	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из металла Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный	100242	600x400x1750	31	Две закрытые секции. Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из металла. Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двухсекционный. одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2	100243	600x400x1750	41	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из металла. Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двустворчатый со	100244	700x320x1655	38	Двухсекционный. двустворчатый, со стеклянными полками и стеклянными

стеклянной верхней секцией				дверками в верхней секции, металлическими полками и дверками в нижней секции
Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией №2	100245	700x320x1655	45	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный Количество створок двухстворчатый. Верхняя секция две дверки и две полки из стекла Нижняя секция две дверки и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный	100246	800x400x1750	45	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двухстворчатый
Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2	100247	800x400x1750	56	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двухстворчатый
Шкаф для медикаментов двухсекционный, двухстворчатый, с металлическими полками и дверками	100248	700x320x1655	41	двухсекционный, двухстворчатый, с металлическими полками и дверками в секциях
Шкаф для медикаментов двухсекционный, двухстворчатый, с металлическими полками и дверками №2	100249	700x320x1655	43	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный Количество створок двухстворчатый
Шкаф для медикаментов двухсекционный, двухстворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный	100250	800x400x1750	38	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двухстворчатый
Шкаф для медикаментов двухсекционный, двухстворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2	100251	800x400x1750	54	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двухстворчатый

6. Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
--------------	---------	---------------------------------------	---------------------	----------------------------

Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х300х2000 мм	100255	1000х300х2000	25	Четыре полки
Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х400х2000 мм	100256	1000х400х2000	30	Четыре полки
Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х500х2000 мм	100257	1000х500х2000	35	Четыре полки
Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х300х2000 мм	100258	1000х300х2000	25	Пять полок
Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х400х2000 мм	100259	1000х400х2000	30	Пять полок
Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х300х2000 мм	100260	1000х500х2000	35	Пять полок

Комплектность крепежа изделий

1. Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100119	100120	100129	100130
Стенка боковая	2	2	2	2
Дно, верх	2	2	2	2
Стенка задняя	1	1	1	1
Полка	1	1	1	-
Дверь	1	1	1	-
Ящик	-	-	-	3
Стяжка-ТЕ 15	8	12	8	20
Шток	8	12	8	20
Шкант 8х30	12	16	8	32
Петля	2	2	2	-
Ручка-скоба	1	2	1	3
Шуруп 2А3-13	24	36	26	42
Заглушка эксцентрик	8	12	8	20
Колесо	4	4	4	4
Компл.направляющих	-	1	-	3
Полкодержатель	-	-	4	-
Конфирмат	-	-	-	-
Ключ шестигранный	-	-	-	-
Заглушка конфирмат	-	-	-	-

2. Стол медицинской сестры двухсекционный:

Наименование	Количество, шт.
	100162
Боковина надстройки	2
Крышка надстройки	2
Задняя стенка надстройки	1
Полка надстройки	2
Перегородка надстройки	1
Задняя стенка	2
Царга	1
Дно	2
Столешница	2
Порог	1
Боковина	6
Ящик	3
Полка	2
Дверь	1
Ручка	4
Стяжка-эксцентрик ТЕ 15 хром	30
Шток	30
Конфирмат	44
Ключ шестигранный	1
Шкант 8х30	100

Шуруп 2А3-13	60
Подпятник	16
Заглушка эксцентрик	30
Заглушка конфирмат	44
Петля	2
Ручка-скоба	4
Полкодержатель	4
Комплект направляющих	3

3. Шкаф медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.				
	100219	100220	100233	100234	100235
Боковая стенка	2	2	2	2	2
Задняя стенка	1	1	1	1	1
Дно, верх	2	2	2	2	2
Полка	5	6	4	2	2
Полка стеклянная	-	-	-	2	2
Дверь	2	2	1	2	4
Штанга	-	1	-	-	-
Перегородка (стойка)	-	1	-	-	-
Конфирмат	16	20	12	12	12
Ключ шестигранный	1	1	1	1	1
Шкант 8х30	16	20	12	12	12
Петля	6	6	2	2	4
Петля с доводчиком	-	-	-	2	2
Ручка-скоба	2	2	-	-	2
Ручка-скоба большая	-	-	1	1	2
Шуруп 2А3-13	50	64	42	42	50
Евровинт V6310	24	24	8	12	24
Винт М5х12	-	-	-	4	8
Регулируемая опора	4	4	4	4	4
Заглушка конфирмат	16	20	12	12	12
Полкодержатель	8	16	12	4	12
Полкодержатель под ст	-	-	-	8	8
Профиль стыковочный	1	-	-	-	1
Штангодержатель	-	2	-	-	-

4. Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100236	100237	100238	100239
Стенка задняя (лев., прав.)	1	1	2	2
Полка	2	2	2	2
Дверь нижняя	1	1	1	1
Дверь стеклянная	1 _(510х745)	1 _(510х745)	1 _(540х795)	1 _(540х795)
Короб	3	3	3	3

Стенка боковая (лев., прав.)	2	2	2	2
Регулируемая опора	4	4	4	4
Полка стеклянная	2 (270x565)	2 (270x565)	2 (350x595)	2 (350x595)
Саморез 4,2x13	25	25	30	30
Саморез 3x17	4	4	4	4
Защелка магнитная	2	2	2	2
Замок мебельный	1	1	1	1
Втулка ПВХ	4	4	4	4
Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.)	1*	1*	1*	1*
Петля для стекла (2 шт.) + ручка	1	1	1	1
Полкодержатель	16	16	16	16
Гайка М5+Шайба 5	11	11	12	12
Винт М5х12	16	16	27	27

* комплектуется по согласованию с заказчиком

Наименование	Количество, шт.			
	100240	100241	100242	100243
Стенка задняя	1	1	1	1
Полка	4	4	4	4
Дверь	2	2	2	2
Короб	3	3	3	3
Стенка боковая (лев., прав.)	2	2	2	2
Регулируемая опора	4	4	4	4
Винт М5х12	26	26	26	26
Шайба 5	26	26	26	26
Саморез 3x17	4	4	4	4
Защелка магнитная	2	2	2	2
Замок мебельный	2	2	2	2
Втулка ПВХ / Ось мебельная	4/4	4/4	4/4	4/4
Полкодержатель	16	16	16	16
Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.)	1*	1*	1*	1*

* комплектуется по согласованию с заказчиком

Наименование	Количество, шт.							
	100244	100245	100246	100247	100248	100249	100250	100251
Стенка задняя (лев., прав.)	2	2	2	2	2	2	2	2
Полка	2	2	2	2	2	2	2	2
Дверь	2	2	2	2	2	2	2	2
Короб	3	3	3	3	3	3	3	3
Стенка боковая (лев., прав.)	2	2	2	2	2	2	2	2
Дверь стеклянная	2 (318x747)	2 (318x747)	2 (367x792)	2 (367x792)	2 (318x747)	2 (318x747)	2 (367x792)	2 (367x792)
Полка стеклянная	2 (272x695)	2 (272x695)	2 (352x795)	2 (352x795)	2 (272x695)	2 (272x695)	2 (352x795)	2 (352x795)
Регулируемая опора	4	4	4	4	4	4	4	4

Винт М5х12	29	29	26	26	29	29	26	26
Гайка М5	25	25	25	25	25	25	25	25
Саморез 4,2х13	20	20	23	23	20	20	23	23
Саморез 3х17	8	8	8	8	8	8	8	8
Защелка магнитная	4	4	4	4	4	4	4	4
Замок мебельный	1	1	1	1	1	1	1	1
Втулка ПВХ	8	8	8	8	8	8	8	8
Ручка для стекла	2	2	2	2	2	2	2	2
Петля для стекла	4	4	4	4	4	4	4	4
Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 — 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.)	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*
Полкодержатель	16	16	16	16	16	16	16	16


5. Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.					
	100255	100256	100257	100258	100259	100260
Стойка	4	4	4	5	5	5
Полка	4	4	4	5	5	5
Подпятник	4	4	4	4	4	4
Уголок (стяжка)	16	16	16	16	16	16
Винт М5х12	40	40	40	48	48	48
Шайба 5	40	40	40	48	48	48
Гайка М5	40	40	40	48	48	48



Инструкция по сборке «Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения»:

*Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой;
артикул 100119*

1. Скрепить при помощи стяжек-эксцентров и шкантов дно (1) с боковыми стенками (2).
2. Между боковинами (2) при помощи шкантов установить полку (4).

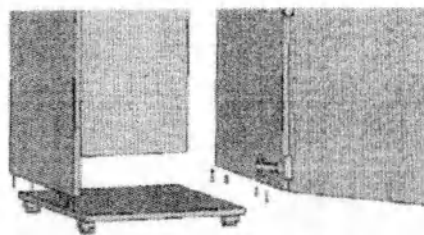



3. Вставить стенку заднюю (3) в пазы боковин (2).
4. При помощи стяжек-эксцентров и шкантов сверху установить крышку (5).

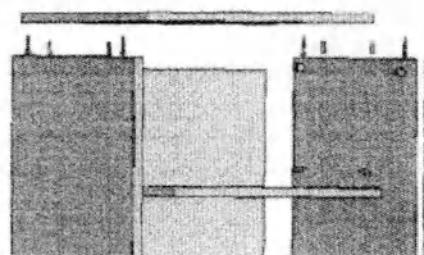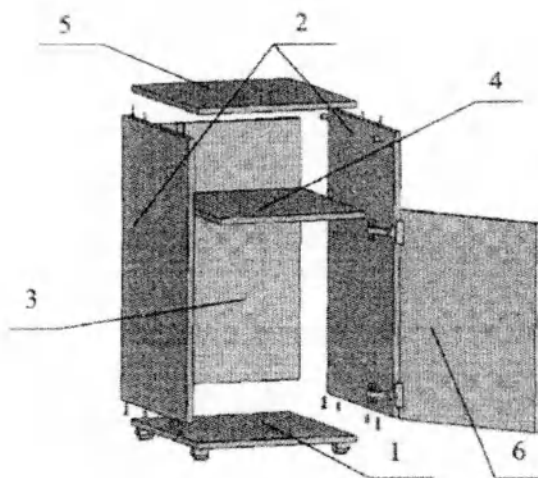


5. С помощью петель навесить дверь (6), отрегулировать ее положение, используя для этого предусмотренные винты на петлях.
6. Используя винты установить на дверь ручку, а снизу к дну (1) установить колеса.

Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100120

1. Скрепить дно (3) при помощи стяжек-эксцентров и шкантов с боковыми стенками (2).
2. Установить заднюю стенку (4) с дном (3) и боковыми стенками (2), заведя заднюю стенку в пазы.

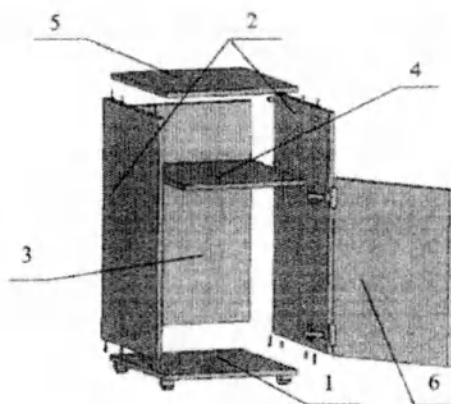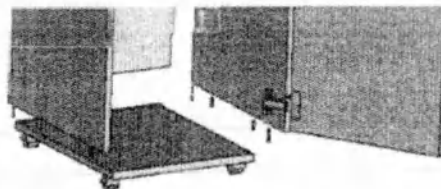


3. При помощи стяжек-эксцентров и шкантов сверху установить крышку (5).
4. К боковинам (2) установить направляющие, используя для этого предусмотренные конструкцией шурупы.

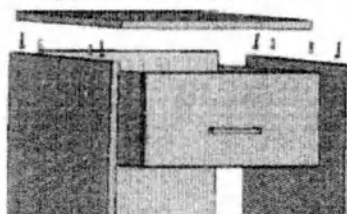


5. С помощью петель навесить дверь (6), отрегулировать ее положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.
6. Собрать ящик (1) при помощи стяжек-эксцентров и шкантов. Дно ящика завести в паз на боковинах и лицевой панели. Прикрепить направляющие при помощи шурупов.
7. Установить ящик (1).
8. Используя винты установить на дверь (6) и ящик (1) ручки, а снизу к дну (1) закрепить колеса.

Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой № 2, артикул 100129

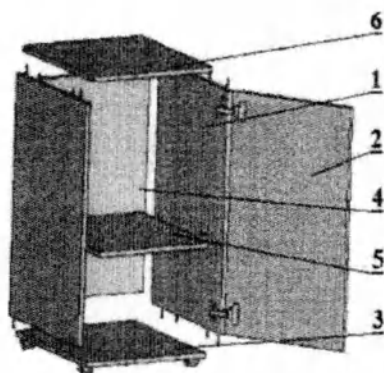

1. Скрепить дно (3) при помощи стяжек-эксцентров и шкантов с боковыми стенками (1).
2. Прикрепить заднюю стенку (4) с дном (3) и боковыми стенкам (1), заведя заднюю стенку (4) в пазы.

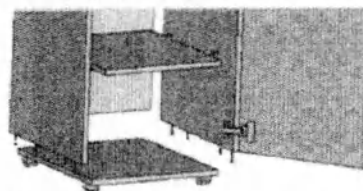


3. При помощи стяжек-эксцентров и шкантов сверху установить крышку (6).
4. Между боковинами (1) при помощи полкодержателей установить полку (5).



5. С помощью петель навесить дверь (2), отрегулировать ее положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.
6. Используя винты на дверь (2) прикрепить ручку, а снизу к дну (3) установить колеса.

Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 3, артикул 100130

1. Скрепить при помощи стяжек-эксцентриков и шкантов дно (2) с боковыми стенками (3).
2. Прикрепить заднюю стенку (4) с дном (2) и боковыми стенками (3), заведя заднюю стенку (4) в пазы.

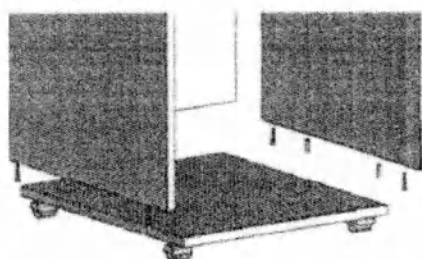

3. При помощи стяжек-эксцентриков и шкантов сверху установить крышку (5).

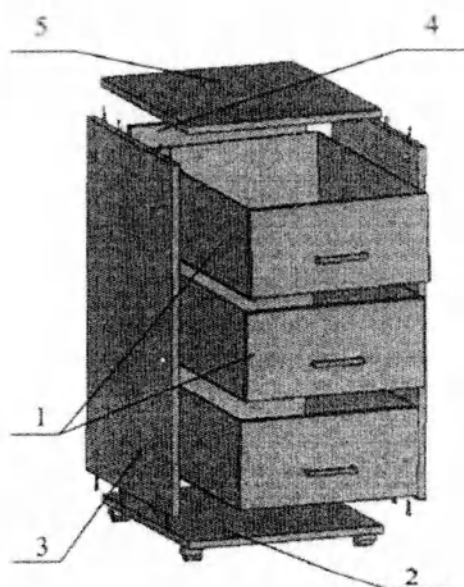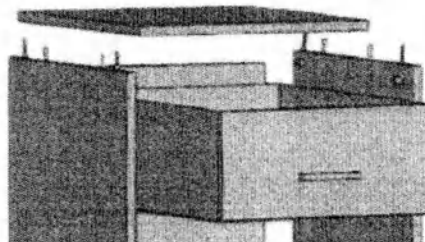


4. К боковинам (3) установить направляющие, используя для этого предусмотренные конструкцией шурупы.
5. Собрать ящики (1) при помощи стяжек-эксцентриков и шкантов. Дно ящика завести в паз на боковинах и лицевой панели. Прикрепить направляющие при помощи шурупов.
5. Установить ящики (1).
6. Используя винты на ящики (1) прикрепить ручки, а снизу к дну (2) установить колеса.

Инструкция по сборке «Стол медицинской сестры двухсекционный»


Стол медицинской сестры двухсекционный, артикул 100162

Стол имеет две секции:


- первая секция — стол; тумба с тремя ящиками; надстройка на столе, с четырьмя полками;
 - вторая секция — приставной столик с тумбой, в которой имеется отделение с дверью и открытая полка.
- Элементы столов и надстроек закреплены друг относительно друга металлическими эксцентриковыми стяжками и деревянными шкантами.

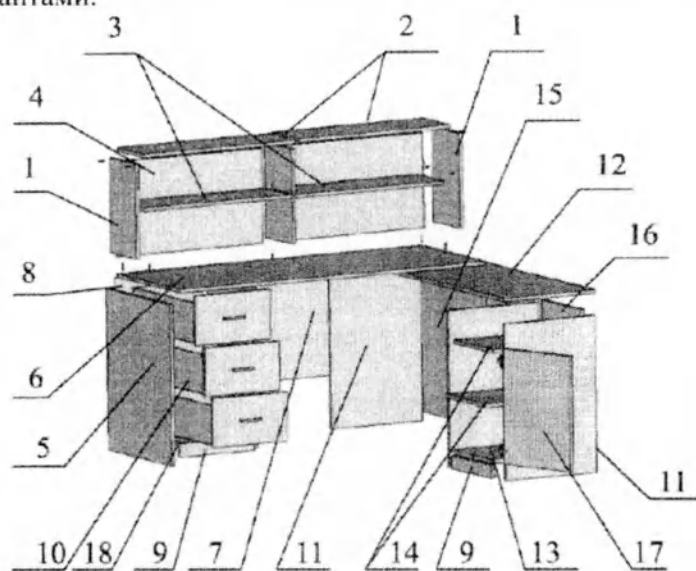

1. При помощи стяжек-эксцентриков и шкантов соединить боковины надстройки (1) с крышками (2), задней стенкой (4) и полками (3).
2. Скрепить с помощью стяжек-эксцентриков и шкантов заднюю стенку (7), царгу (8), дно (18), столешницу (6) и шкантами порог (9) с боковинами стола (5) левой секции.
3. Собрать ящики (10) при помощи стяжек-эксцентриков и шкантов. Дно ящика завести в паз на боковина и лицевой панели. Прикрепить направляющие при помощи шурупов.
4. На направляющих, которые шурупами крепятся к боковинам стола (5) левой секции, установить ящики (10).

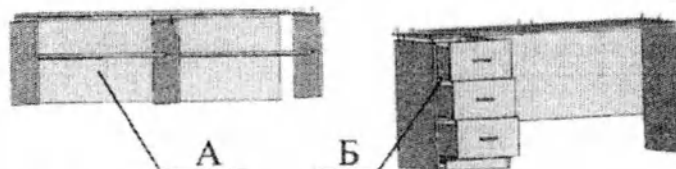

5. Скрепить конфирматами надстройку (А) со столом (Б) левой секции.
6. С помощью стяжек-эксцентриков и шкантов скрепить боковины стола правой части (11) с дном (13), задней стенкой (15), царгой (16), столешницей (12) и шкантами с порогом (9).
7. Между боковинами правой части (11) на полкодержатели установить полки (14).

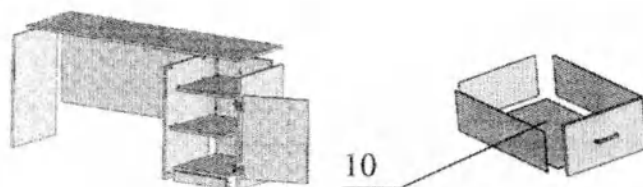


8. С помощью петель навесить дверь (17), используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

9. Используя винты на дверь (17) и ящики (10) прикрепить ручки, а под боковины столов правой и левой секций (5, 11) с помощью шурупов установить подпятники.

Инструкция по сборке «Шкаф медицинский, в вариантах исполнения»:

Шкаф медицинский с двумя дверьми и пятью полками, с регулируемыми опорами, артикул 100219

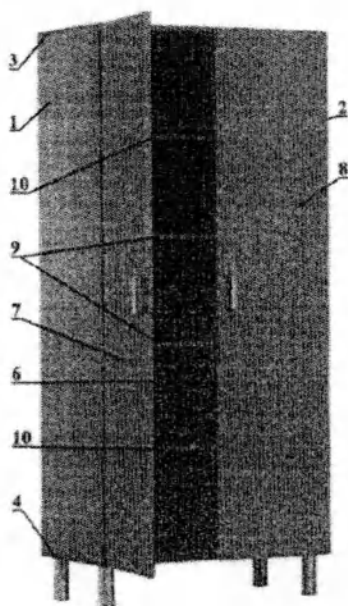

1. При помощи конфирматов и шкантов скрепить боковые стенки (1, 2) с крышкой (3), полками (9), дном (4).

2. С помощью шурупов и стыковочного профиля скрепить стенку заднюю (6) с боковыми стенками (1, 2), крышкой (3) и дном (4).

3. Между боковинами (1, 2) на полкодержателях установить полки (10).


4. Прикрепить петли к дверям (7, 8) при помощи евровинтов.

5. Прикрепить двери (7, 8) к боковым стенкам при помощи евровинтов, отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.




6. Используя винты на двери (7, 8) прикрепить ручки, а на дно с помощью шурупов установить регулируемые опоры.

Шкаф медицинский двустворчатый, с двумя вертикальными отделениями, с регулируемыми опорами, артикул 100220

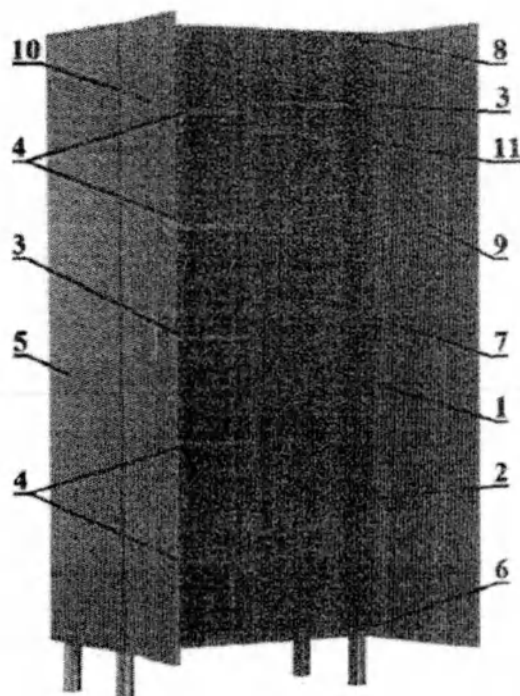


1. Соединить стенки (1, 2, 5) с крышкой (8) и дном (6) с помощью конфирматов и шкантов.
2. Установить при помощи конфирматов и шкантов полки (3).
3. С помощью шурупов прикрепить стенки задние (7) к боковым стенкам (1, 5), крышке (8), дну (6) и стойке (2).
4. Между стойкой (2) и боковой стенкой (5) на полкодержателях установить полки (4), а также прикрепить при помощи шурупов штангодержатели и установить штангу.

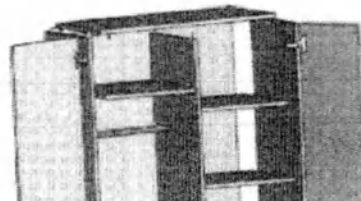


5. Прикрепить петли к дверям (9, 10) при помощи евровинтов.
6. Прикрепить двери (9, 10) к боковым стенкам при помощи евровинтов, отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.
7. Используя винты на двери (9, 10) прикрепить ручки, а на дно с помощью шурупов установить регулируемые опоры.


Шкаф медицинский одностворчатый с открытой секцией, артикул 100233

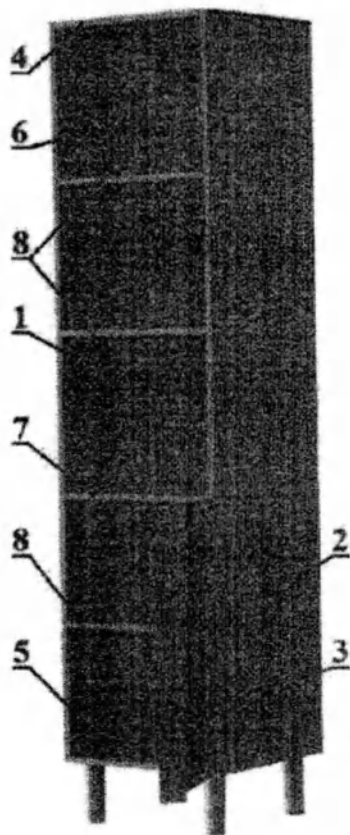

1. При помощи конфирмагов и шкантов скрепить боковые стенки (1,2) с крышкой (4), полкой (8), дном (5) и шкантами с порогом (6).
2. С помощью шурупов скрепить стенку заднюю (6) с боковыми стенками (1, 2), крышкой (4) и дном (5).

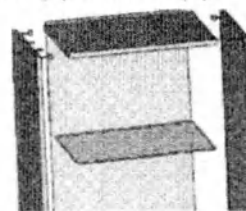


3. Между боковинами (1, 2) на полкодержателях установить полки (9).
4. С помощью петель навесить дверь (3), отрегулировать ее положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

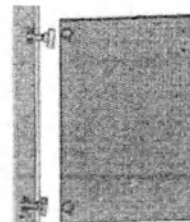


5. Используя винты на дверь (3) прикрепить ручку-скобу, а под боковины (1, 2) с помощью саморезов установить регулируемые опоры.

Шкаф медицинский одностворчатый с двумя дверцами, артикул 100234

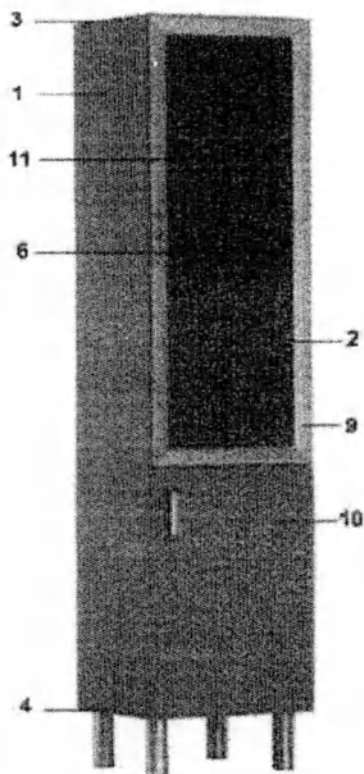


1. При помощи конфирматов и шкантов скрепить боковые стенки (1, 2) с крышкой (3), полкой (7), дном (4).

2. С помощью шурупов скрепить стенку заднюю (6) с боковыми стенками (1, 2), крышкой (3) и дном (4).

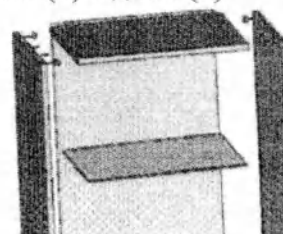


3. Между боковинами (1, 2) на полкодержателях установить полку (8) и стеклянные полки (11).

4. С помощью петель навесить дверь (10) и стеклянную дверь (9), отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

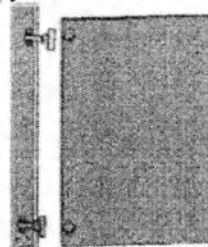


5. Используя винты на двери (9, 10) прикрепить ручки, а под боковины (1, 2) с помощью саморезов установить регулируемые опоры.

Шкаф медицинский двухсекционный, двустворчатый с четырьмя дверцами, артикул 100235

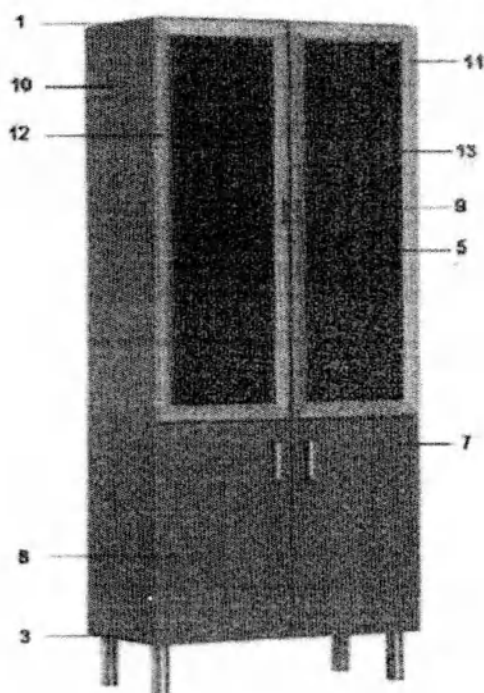

1. Скрепить при помощи стяжек-эксцентров и шкантов боковые стенки (9, 10) с крышкой (1), с полкой (2), дном (3).

2. С помощью саморезов или гвоздей скрепить стенку заднюю (5) с боковыми стенками (9, 10), крышкой (1) и дном (3).

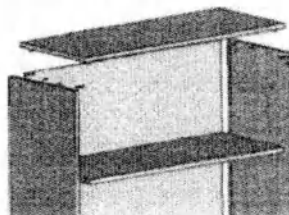

3. Между боковинами (9, 10) на полкодержателях установить полку (6) и стеклянные полки (13).

4. С помощью петель навесить двери (7, 8) и стеклянные двери (11, 12), отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

5. Используя винты на двери (7, 8, 11, 12) прикрепить ручки, а под боковины (9, 10) с помощью саморезов установить регулируемые опоры.


Инструкция по сборке «Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения»:

Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100236;



Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100237;

Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100238;

Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100239

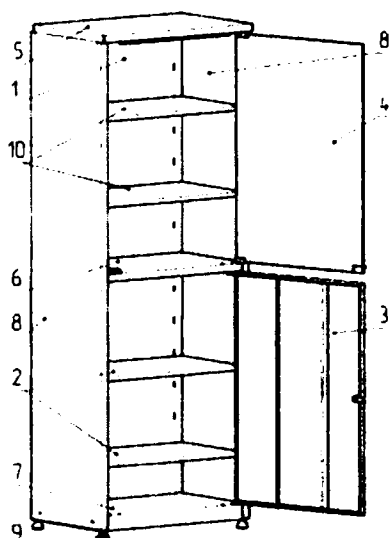

1. Соединить стенки задние (1) при помощи винтов и гаек М5. Работы производить на ровной и чистой поверхности.

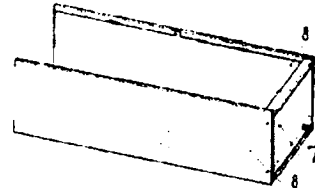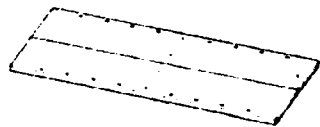

2. Вставить боковые стенки (8) в короб нижний (7) и закрепить при помощи саморезов 4,2x13.


3. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2x13.

4. Прикрепить короб верхний (5) при помощи винтов и гаек М5.

5. Прикрепить короб средний (6) - завести в пазы на боковых стенках (8) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.


6. Прикрепить регулируемые опоры (9) к коробу нижнему (7).

Если шкаф оснащен ножками металлическими (16) прикрепить их к коробу нижнему (7) при помощи болтов М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (9).

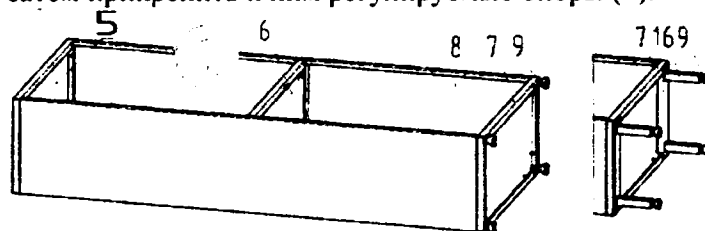

8. Собрать дверь металлическую (3), вставить замок мебельный (14).

9. Собрать дверь стеклянную (4): прикрепить ручку и петли (17).

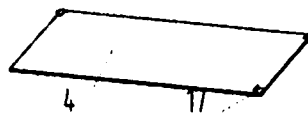


10. Установить защелки магнитные (13) при помощи саморезов 3x17.

11. Установить втулки (15) в места крепления дверей.

12. Установить двери (3). Для этого вставить винт М5 через отверстие в двери во втулку, а затем подогнуть фиксатор на двери.

13. Установить двери (4).

14. Установить полки (2, 10) на полкодержатели (18).

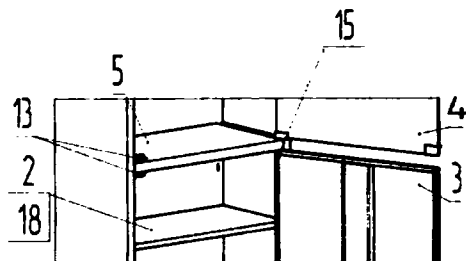


Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100240;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками №2,
артикул 100241;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками,
углубленный, артикул 100242;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками,
углубленный №2, артикул 100243

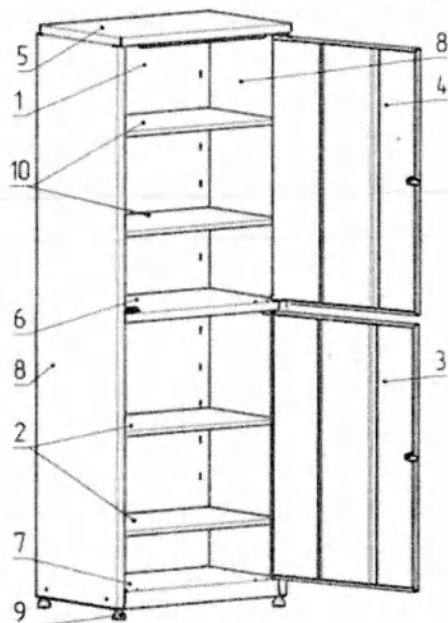

1. Соединить боковые стенки (8) со стенкой задней (1). Для этого нужно завести боковые стенки сверху в отгибы в задней стенке. Зафиксировать их винтами.

2. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2x13.

3. Прикрепить короб средний (6) - завести в пазы на боковых стенках (8) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.

4. Установить втулки ПВХ в отверстия в коробе среднем сверху и снизу и в коробе верхнем.

5. Установить оси в короб средний и в верхнее отверстие двери. Поставить верхнюю дверь (4).


6. Прикрепить короб верхний (5) при помощи винтов и гаек М5.

7. Снизу установить короб нижний (7), предварительно вставив в него втулку ПВХ, в верхнее отверстие двери — ось.

8. Установить нижнюю дверь, а короб нижний скрепить винтами.

9. Закрутить в короб нижний регулируемые опоры (9) и выставить ими такое положение шкафа, при котором двери открываются и закрываются свободно

без заедания. Если шкаф оснащен ножками металлическими (16) прикрепить их к коробу нижнему (7) при помощи болтов М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (9).

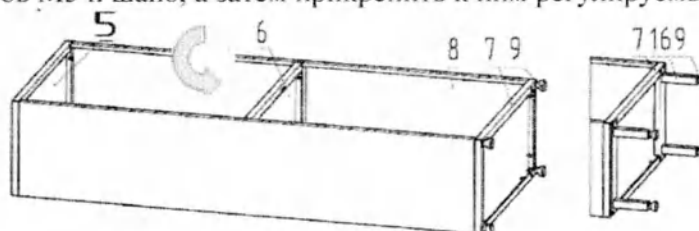


8. Собрать дверь металлическую (3, 4), вставить замок мебельный (14).



10. Установить защелки магнитные (13) при помощи саморезов 3x17.

14. Установить полки (2, 10) на полкодержатели (18).

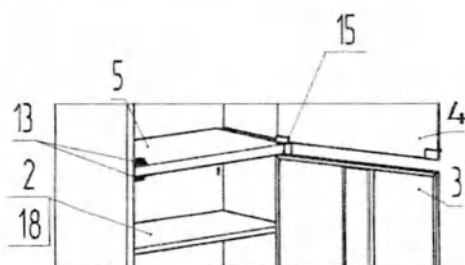


Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100244;



Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100245;

Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100246;

Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100247

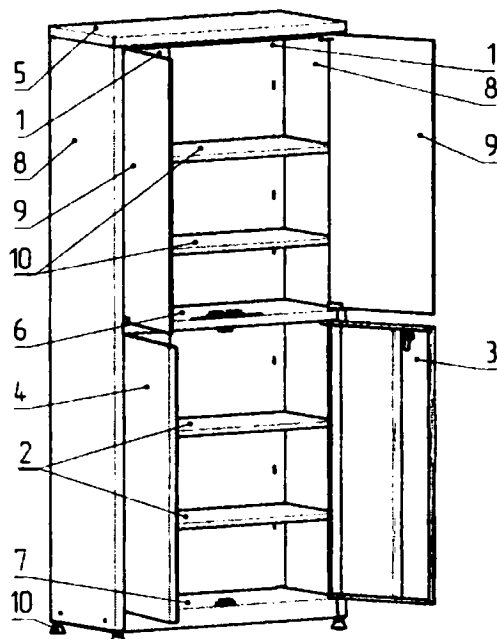

1. Соединить стенки задние (1) при помощи винтов и гаек М5. Работы производить на ровной и чистой поверхности.

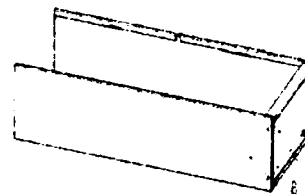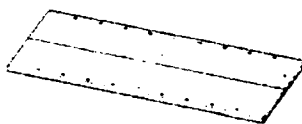

2. Вставить боковые стенки (8) в короб нижний (7) и закрепить при помощи саморезов 4,2х13.


3. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2х13.

4. Прикрепить короб верхний (5) при помощи винтов и гаек М5.

5. Прикрепить короб средний (6) - завести в пазы на боковых стенках (8) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.



6. Прикрепить регулируемые опоры (11) к коробу нижнему (7).

7. Если шкаф оснащен ножками металлическими (21) прикрепить их к коробу нижнему (7) при помощи болтов М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (11).

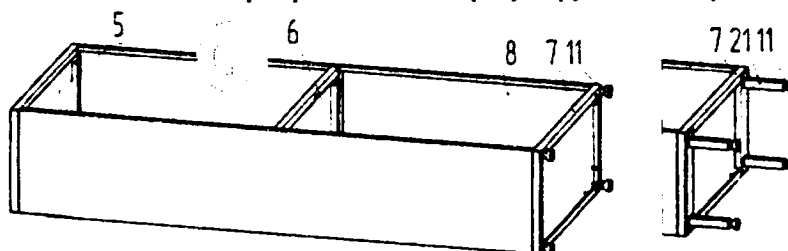

8. Собрать двери металлические (3): вставить замок мебельный (15).

9. Собрать двери стеклянные (9): прикрепить ручку (18) и нижние петли (19).

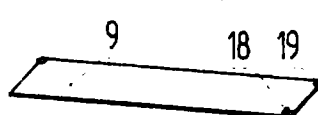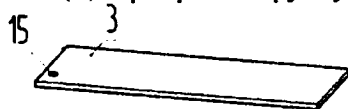


10. Установить защелки магнитные (15) при помощи саморезов 3х17.

11. Установить втулки (16) в места крепления дверей.

12. Установить двери (3, 4). Для этого вставить винт М5 через отверстие в двери во втулку, а затем подогнуть фиксатор на двери.

13. Установить двери (9). Для этого установить дверь с нижней петлей во втулку, затем установить верхнюю петлю и зафиксировать.

14. Установить полки (2) и (10) на полкодержатели (20).

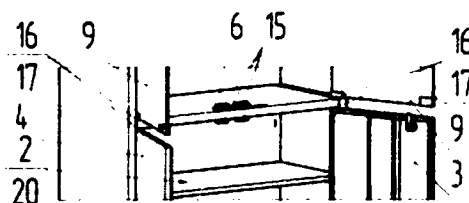


Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100248;



Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100249;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100250;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100251

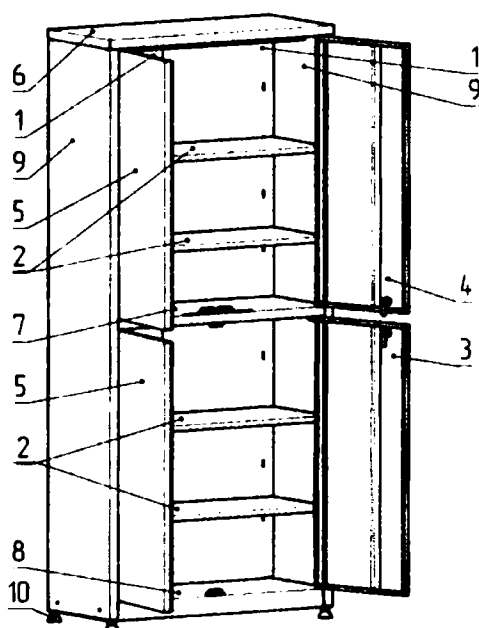

1. Соединить стенки задние (1) при помощи винтов и гаек М5. Работы производить на ровной и чистой поверхности.

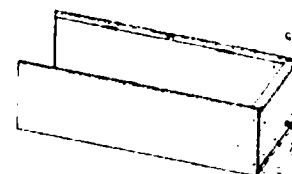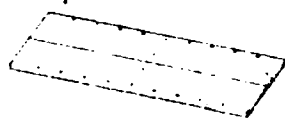

2. Вставить боковые стенки (9) в короб нижний (8) и закрепить при помощи саморезов 4,2х13.

3. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2х13.


4. Прикрепить короб верхний (6) при помощи винтов и гаек М5.

5. Прикрепить короб средний (7) - завести в пазы на боковых стенках (9) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.

6. Прикрепить регулируемые опоры (10) к коробу нижнему (8).

Если шкаф оснащен ножками металлическими (18) прикрепить их к коробу нижнему (8) при помощи болта М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (10).

7. Собрать двери металлические (3, 4): вставить замок мебельный (14).

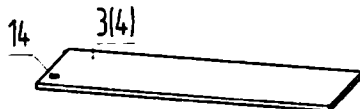


8. Установить защелки магнитные (13) при помощи саморезов 3х17.

10. Установить втулки (14) в места крепления дверей.

11. Установить двери (3, 4, 5). Для этого вставить винт М5 через отверстие в двери во втулку, а затем подогнуть фиксатор на двери.

12. Установить полки (2) на полкодержатели (17).

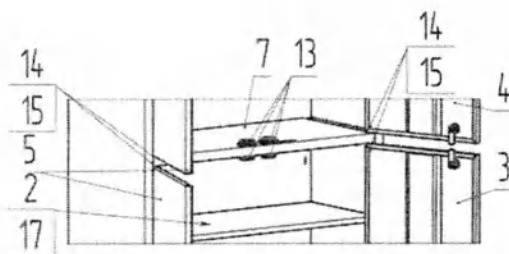

Инструкция по сборке «Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения»:

Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x300x2000 мм, артикул 100255;

Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x400x2000 мм, артикул 100256;



Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x500x2000 мм, артикул 100257;

Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x300x2000 мм, артикул 100258;

Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x400x2000 мм, артикул 100259;

Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x300x2000 мм, артикул 100260.

1. Положить стойки на горизонтальную поверхность, установить пластиковые подпятники.
2. Соединить стойки с полками с помощью винтов, шайб и гаек. Верхнюю и нижнюю полки соединять через стяжки (уголки).

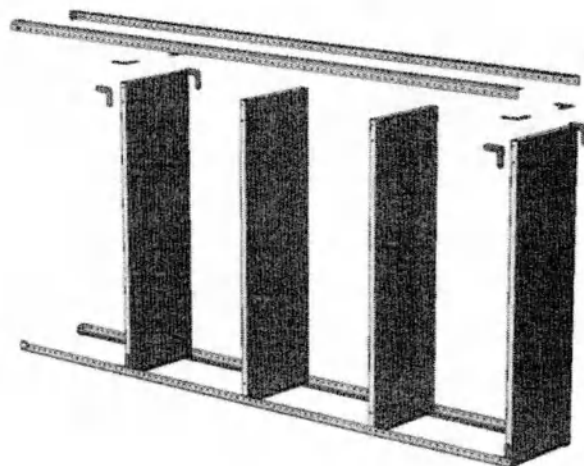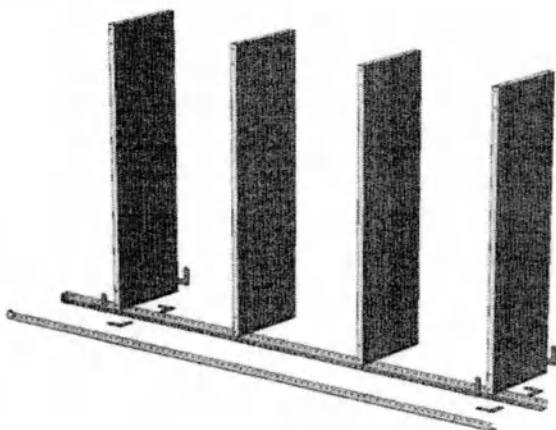

Внешний вид. Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100118



Внешний вид. Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100121;

Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой № 2, артикул 100123




Внешний вид. Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100122;

Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100124




Внешний вид. Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100125;

Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100126

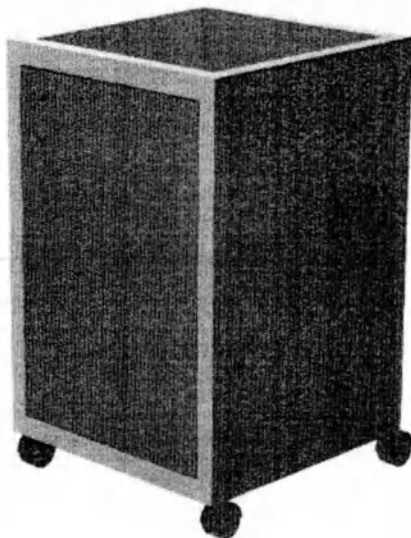


Внешний вид. Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками, артикул 100127;


Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 2, артикул 100128

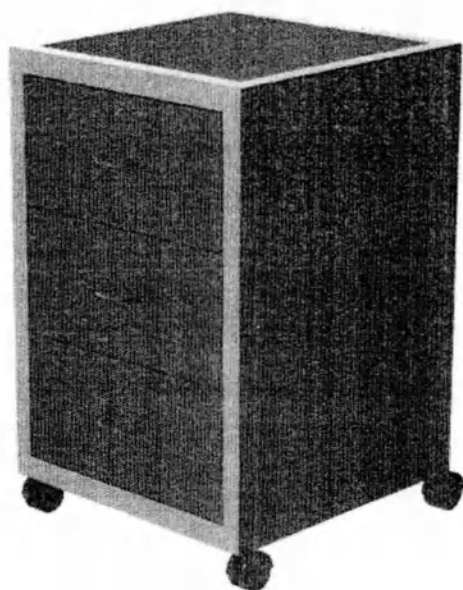


Внешний вид. Шкаф медицинский навесной двустворчатый, артикул 100221

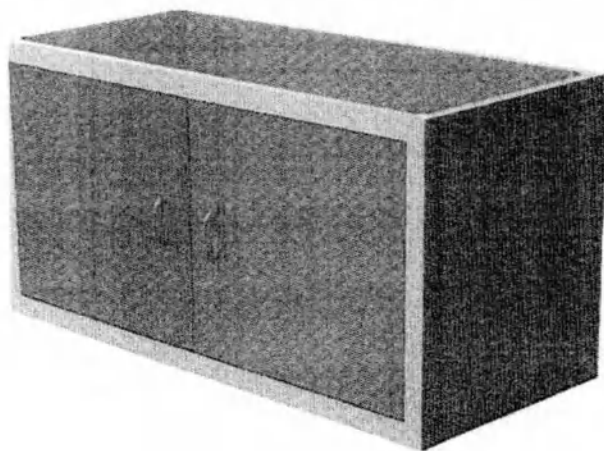


Внешний вид. Шкаф медицинский навесной двустворчатый остекленный, артикул 100222

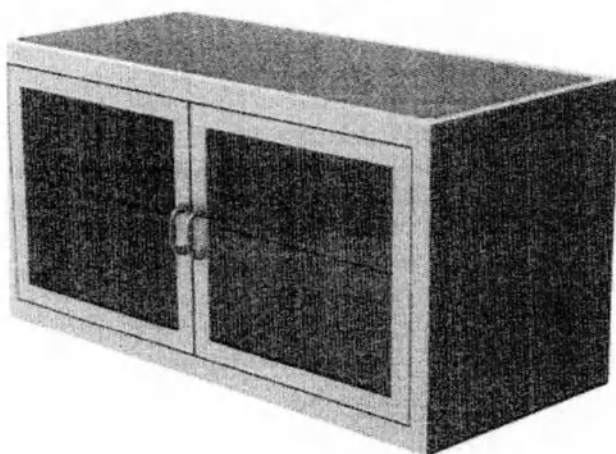

Внешний вид. Шкаф медицинский навесной двустворчатый с полкой, артикул 100223

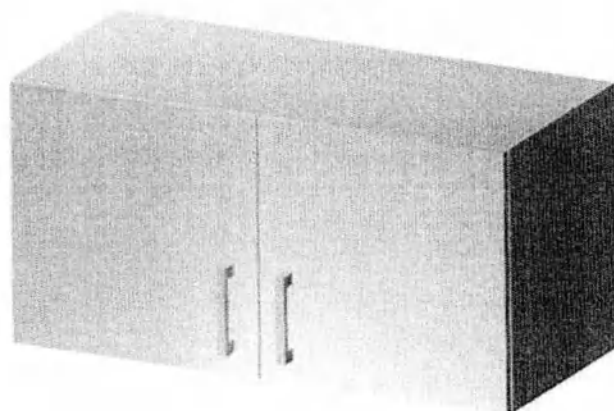

Внешний вид. Шкаф медицинский навесной двустворчатый остекленный с полкой, артикул 100224

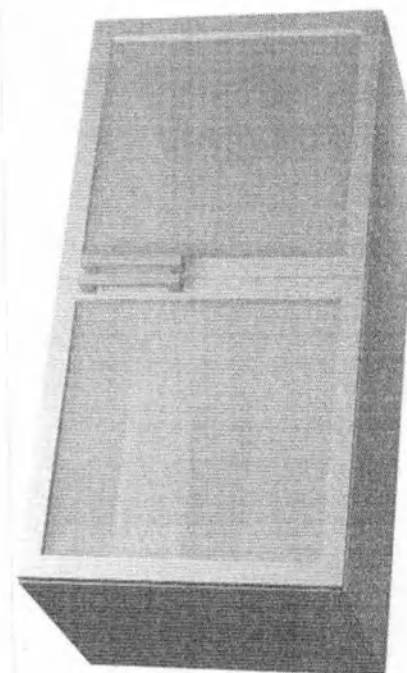

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Набор мебели медицинской для оснащения поста медицинской сестры _____

_____ обозначение (модификация)

сериальный номер _____,
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией (ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022) и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
личная подпись

_____ расшифровка подписи

МП _____

_____ год, месяц, число

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель: Индивидуальный предприниматель Костров Александр Анатольевич

Адрес: _____

Тел. _____

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Набор мебели медицинской для оснащения поста медицинской сестры _____

по ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022 _____

_____ обозначение (модификация)

Серийный № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия _____

б) Заполняет продавец

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца _____

в) Заполняет исполнитель

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Исполнитель _____

подпись

Фрешидо
(50) метров
прогулка
на воде.
17 катер А-1.




11

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель Костров

Александр Анатольевич

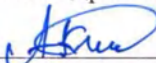 А.А. Костров

« 15 » 11 2023 г.

Руководство по эксплуатации

Набор мебели медицинской для оснащения процедурного кабинета

(выпущено впервые)

2023 г.

1. Наименование и область применения медицинского изделия.

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с основными техническими данными, устройством и правилами пользования медицинским изделием «**Набор мебели медицинской для оснащения процедурного кабинета**», изготавливаемым по ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022 (далее по тексту - *Набор*) и предназначенным для оснащения процедурного кабинета в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля.

Область применения - лечебно-профилактические учреждения любого профиля.

1.	Набор мебели медицинской для оснащения процедурного кабинета №1, в составе:
1.1	Стол медицинский для забора крови, артикул 100172, в составе:
1.1.1	Столик - 1 шт.;
1.1.2	Каркас - 1 шт.;
1.1.3	Опора - 2 шт.;
1.1.4	Винт М5 Х 35 - 8 шт.;
1.1.5	Шайба 5 - 8 шт.;
1.1.6	Гайка М5 - 8 шт.;
1.1.7	Ножка - 4 шт.;
1.2	Стол медицинский инструментальный, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
1.2.1	Стол медицинский инструментальный с нишей и дверкой, артикул 100173, в составе:
1.2.1.1	Основание - 1 шт.;
1.2.1.2	Заклепка М6 резьбовая - 38 шт.;
1.2.1.3	Винт 6х10 мм - 42 шт.;
1.2.1.4	Футорка М6 - 4 шт.;
1.2.1.5	Боковина - 2 шт.;
1.2.1.6	Замок мебельный - 1 шт.;
1.2.1.7	Ручка врезная - 1 шт.;
1.2.1.8	Опора колесная 100 мм - 4 шт.;
1.2.1.9	Карточная петля - 2 шт.;
1.2.1.10	Столешница - 1 шт.;
1.2.2	Стол медицинский инструментальный с выдвижным ящиком и дверкой, артикул 100174, в составе:
1.2.2.1	Основание - 1 шт.;
1.2.2.2	Заклепка М6 резьбовая - 52 шт.;
1.2.2.3	Винт 6х10 мм - 56 шт.;
1.2.2.4	Футорка М6 - 4 шт.;
1.2.2.5	Боковина - 2 шт.;
1.2.2.6	Замок мебельный - 1 шт.;
1.2.2.7	Ручка врезная - 2 шт.;
1.2.2.8	Опора колесная 100 мм - 4 шт.;
1.2.2.9	Карточная петля - 2 шт.;
1.2.2.10	Столешница - 1 шт.;
1.2.3	Стол медицинский инструментальный с тремя выдвижными ящиками, артикул 100175, в составе:
1.2.3.1	Основание - 1 шт.;
1.2.3.2	Заклепка М6 резьбовая - 79 шт.;
1.2.3.3	Винт 6х10 мм - 83 шт.;
1.2.3.4	Футорка М6 - 4 шт.;
1.2.3.5	Боковина - 2 шт.;
1.2.3.6	Замок мебельный - 1 шт.;
1.2.3.7	Ручка врезная - 3 шт.;
1.2.3.8	Опора колесная 100 мм - 4 шт.;
1.2.3.9	Карточная петля - 2 шт.;
1.2.3.10	Столешница - 1 шт.;
1.2.3.11	Направляющая роликовая - 6 шт.

1.2.4	Стол медицинский инструментальный с двумя нишами и дверками, артикул 100176, в составе:
1.2.4.1	Основание – 1 шт.;
1.2.4.2	Заклепка М6 резьбовая – 54 шт.;
1.2.4.3	Винт 6х10 мм – 58 шт.;
1.2.4.4	Футорка М6 – 4 шт.;
1.2.4.5	Боковина – 3 шт.;
1.2.4.6	Замок мебельный – 2 шт.;
1.2.4.7	Ручка врезная – 2 шт.;
1.2.4.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
1.2.4.9	Карточная петля – 4 шт.;
1.2.4.10	Столешница – 1 шт.;
1.2.5	Стол медицинский инструментальный широкий с двумя выдвижными ящиками и нишей, артикул 100177, в составе:
1.2.5.1	Основание – 1 шт.;
1.2.5.2	Заклепка М6 резьбовая – 65 шт.;
1.2.5.3	Винт 6х10 мм – 69 шт.;
1.2.5.4	Футорка М6 – 4 шт.;
1.2.5.5	Боковина – 2 шт.;
1.2.5.6	Ручка врезная – 2 шт.;
1.2.5.7	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
1.2.5.8	Столешница – 1 шт.;
1.2.5.9	Направляющая роликовая – 4 шт.;
1.2.6	Стол медицинский инструментальный широкий с тремя выдвижными ящиками, артикул 100178, в составе:
1.2.6.1	Основание – 1 шт.;
1.2.6.2	Заклепка М6 резьбовая – 79 шт.;
1.2.6.3	Винт 6х10 мм – 83 шт.;
1.2.6.4	Футорка М6 – 4 шт.;
1.2.6.5	Боковина – 2 шт.;
1.2.6.6	Замок мебельный – 1 шт.;
1.2.6.7	Ручка врезная – 3 шт.;
1.2.6.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
1.2.6.9	Карточная петля – 2 шт.;
1.2.6.10	Столешница – 1 шт.;
1.2.6.11	Направляющая роликовая – 6 шт.;
1.2.7	Стол медицинский инструментальный с двумя выдвижными ящиками и дверками, артикул 100179, в составе:
1.2.7.1	Основание – 1 шт.;
1.2.7.2	Заклепка М6 резьбовая – 80 шт.;
1.2.7.3	Винт 6х10 мм – 86 шт.;
1.2.7.4	Футорка М6 – 6 шт.;
1.2.7.5	Боковина – 3 шт.;
1.2.7.6	Замок мебельный – 2 шт.;
1.2.7.7	Ручка врезная – 4 шт.;
1.2.7.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
1.2.7.9	Карточная петля – 4 шт.;
1.2.7.10	Столешница – 1 шт.;
1.2.8	Стол медицинский инструментальный с четырьмя выдвижными ящиками и дверкой, артикул 100180, в составе:
1.2.8.1	Основание – 1 шт.;
1.2.8.2	Заклепка М6 резьбовая – 107 шт.;
1.2.8.3	Винт 6х10 мм – 116 шт.;
1.2.8.4	Футорка М6 – 6 шт.;
1.2.8.5	Боковина – 3 шт.;
1.2.8.6	Замок мебельный – 1 шт.;

1.2.8.7	Ручка врезная – 5 шт.;
1.2.8.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
1.2.8.9	Карточная петля – 2 шт.;
1.2.8.10	Столешница – 1 шт.;
1.2.8.11	Направляющая роликовая – 8 шт.
1.3	Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
1.3.1	Кушетка медицинская смотровая бесступенчатая, артикул 100265, в составе:
1.3.1.1	Ложе – 1 шт.;
1.3.1.2	Стойка левая – 1 шт.;
1.3.1.3	Стойка правая – 1 шт.;
1.3.1.4	Стяжка – 1 шт.;
1.3.1.5	Болт М10х45 – 6 шт.;
1.3.1.6	Шайба – 6 шт.;
1.3.1.7	Заглушка – 4 шт.;
1.3.2	Кушетка медицинская смотровая со ступенчатым подголовником, артикул 100266, в составе:
1.3.2.1	Ложе с каркасом и подголовником – 1 шт.;
1.3.2.2	Ножка – 4 шт.;
1.3.2.3	Гайка М10 – 8 шт.;
1.3.2.4	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;
1.3.2.5	Заглушка – 6 шт.;
1.4	Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
1.4.1	Ширма медицинская стационарная, 1 секция, артикул 100284, в составе:
1.4.1.1	Экран – 1 шт.;
1.4.1.2	Стяжка – 2 шт.;
1.4.1.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
1.4.1.4	Стойка двойная – 1 шт.;
1.4.1.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
1.4.1.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
1.4.1.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
1.4.1.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
1.4.1.9	Шайба 4 – 2 шт.;
1.4.1.10	Гайка М4 – 2 шт.;
1.4.1.11	Заглушка МСК302/4 – 5 шт.;
1.4.2	Ширма медицинская стационарная, 2 секции, артикул 100285, в составе:
1.4.2.1	Экран – 1 шт.;
1.4.2.2	Стяжка – 2 шт.;
1.4.2.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
1.4.2.4	Стойка двойная – 1 шт.;
1.4.2.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
1.4.2.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
1.4.2.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
1.4.2.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
1.4.2.9	Шайба 4 – 2 шт.;
1.4.2.10	Гайка М4 – 2 шт.;
1.4.2.11	Заглушка МСК302/4 – 5 шт.;
1.4.3	Ширма медицинская стационарная, 3 секции, артикул 100286, в составе:
1.4.3.1	Экран – 1 шт.;
1.4.3.2	Стяжка – 2 шт.;
1.4.3.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
1.4.3.4	Стойка двойная – 1 шт.;
1.4.3.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
1.4.3.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
1.4.3.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;

1.4.3.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
1.4.3.9	Шайба 4 – 2 шт.;
1.4.3.10	Гайка М4 – 2 шт.;
1.4.3.11	Заглушка МСК302/4 – 5 шт.;
1.4.4	Ширма медицинская стационарная, 1 секция, на плоских ножках, артикул 100287, в составе:
1.4.4.1	Экран – 1 шт.;
1.4.4.2	Стяжка – 2 шт.;
1.4.4.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
1.4.4.4	Стойка двойная – 1 шт.;
1.4.4.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
1.4.4.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
1.4.4.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
1.4.4.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
1.4.4.9	Шайба 4 – 2 шт.;
1.4.4.10	Гайка М4 – 2 шт.;
1.4.5	Ширма медицинская стационарная, 2 секции, на плоских ножках, артикул 100288, в составе:
1.4.5.1	Экран – 1 шт.;
1.4.5.2	Стяжка – 2 шт.;
1.4.5.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
1.4.5.4	Стойка двойная – 1 шт.;
1.4.5.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
1.4.5.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
1.4.5.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
1.4.5.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
1.4.5.9	Шайба 4 – 2 шт.;
1.4.5.10	Гайка М4 – 2 шт.;
1.4.6	Ширма медицинская стационарная, 3 секции, на плоских ножках, артикул 100289, в составе:
1.4.6.1	Экран – 1 шт.;
1.4.6.2	Стяжка – 2 шт.;
1.4.6.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
1.4.6.4	Стойка двойная – 1 шт.;
1.4.6.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
1.4.6.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
1.4.6.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
1.4.6.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
1.4.6.9	Шайба 4 – 2 шт.;
1.4.6.10	Гайка М4 – 2 шт.;
1.5	Кровать стационарная с подголовником, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
1.5.1	Кровать стационарная с подголовником, П-образный профиль, артикул 100108, в составе:
1.5.1.1	Ложе с подголовником – 1 шт.;
1.5.1.2	Спинка – 2 шт.;
1.5.1.3	Болт М6х35 – 8 шт.;
1.5.1.4	Гайка М6 – 1 шт.;
1.5.1.5	Шайба 6 – 8 шт.;
1.5.2	Кровать стационарная с подголовником, П-образный профиль, большая, артикул 100109, в составе:
1.5.2.1	Ложе с подголовником – 1 шт.;
1.5.2.2	Спинка – 2 шт.;
1.5.2.3	Болт М6х35 – 8 шт.;
1.5.2.4	Болт мебельный М8х70 – 8 шт.;
1.5.2.5	Гайка М6 – 8 шт.;
1.5.2.6	Гайка М8 – 4 шт.;

1.5.2.7	Шайба 6 – 8 шт.;
1.5.2.8	Шайба 8 – 4 шт.;
1.5.2.9	Уголок левый – 2 шт.;
1.5.2.10	Уголок правый – 2 шт.;
1.5.3	Кровать стационарная с подголовником 1950x700x680 мм, высокая, артикул 100110, в составе:
1.5.3.1	Ложе с подголовником – 1 шт.;
1.5.3.2	Спинка – 2 шт.;
1.5.3.3	Болт М6х35 – 8 шт.;
1.5.3.4	Гайка М6 – 8 шт.;
1.5.3.5	Шайба 6 – 8 шт.;
1.5.4	Кровать стационарная с подголовником 1950x700x840 мм, артикул 100111, в составе:
1.5.4.1	Ложе с подголовником – 1 шт.;
1.5.4.2	Спинка – 2 шт.;
1.5.4.3	Болт М6х35 – 8 шт.;
1.5.4.4	Болт мебельный М8х70 – 8 шт.;
1.5.4.5	Гайка М6 – 8 шт.;
1.5.4.6	Гайка М8 – 4 шт.;
1.5.4.7	Шайба 6 – 8 шт.;
1.5.4.8	Шайба 8 – 4 шт.;
1.5.4.9	Уголок левый – 2 шт.;
1.5.4.10	Уголок правый – 2 шт.;
1.6	Стол медицинский подкатной, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
1.6.1	Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты, артикул 100164, в составе:
1.6.1.1	Основание столика – 1 шт.;
1.6.1.2	Вертикальная направляющая – 1 шт.;
1.6.1.3	Стойка столешницы – 1 шт.;
1.6.1.4	Столешница – 1 шт.;
1.6.1.5	Винт М6 х 45 – 5 шт.;
1.6.1.6	Гайка М6 – 5 шт.;
1.6.1.7	Шайба 6 – 5 шт.;
1.6.1.8	Шуруп 5 X 15 – 8 шт.;
1.6.1.9	Рукоятка – 1 шт.;
1.6.1.10	Колесо – 4 шт.;
1.6.2	Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №2, артикул 100165, в составе:
1.6.2.1	Основание столика – 1 шт.;
1.6.2.2	Вертикальная направляющая – 1 шт.;
1.6.2.3	Стойка столешницы – 1 шт.;
1.6.2.4	Столешница – 1 шт.;
1.6.2.5	Винт М6 х 45 – 5 шт.;
1.6.2.6	Гайка М6 – 5 шт.;
1.6.2.7	Шайба 6 – 5 шт.;
1.6.2.8	Шуруп 5 X 15 – 8 шт.;
1.6.2.9	Винт М10х25 – 4 шт.;
1.6.2.10	Рукоятка – 1 шт.;
1.6.2.11	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;
1.6.2.12	Колесо – 4 шт.;
1.6.3	Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №3, артикул 100166, в составе:
1.6.3.1	Основание столика – 1 шт.;
1.6.3.2	Вертикальная направляющая – 1 шт.;
1.6.3.3	Стойка столешницы – 1 шт.;
1.6.3.4	Столешница – 1 шт.;
1.6.3.5	Винт М6 х 45 – 5 шт.;
1.6.3.6	Гайка М6 – 5 шт.;
1.6.3.7	Шайба 6 – 5 шт.;

1.6.3.8	Винт М10х25 – 4 шт.;
1.6.3.9	Рукоятка – 1 шт.;
1.6.3.10	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;
1.6.3.11	Колесо – 4 шт.;
1.6.4	Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №4, артикул 100167, в составе:
1.6.4.1	Основание столика – 1 шт.;
1.6.4.2	Вертикальная направляющая – 1 шт.;
1.6.4.3	Стойка столешницы – 1 шт.;
1.6.4.4	Столешница – 1 шт.;
1.6.4.5	Винт М6 х 45 – 5 шт.;
1.6.4.6	Гайка М6 – 5 шт.;
1.6.4.7	Шайба 6 – 5 шт.;
1.6.4.8	Шуруп 5 X 15 – 8 шт.;
1.6.4.9	Винт М10х25 – 4 шт.;
1.6.4.10	Рукоятка – 1 шт.;
1.6.4.11	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;
1.6.4.12	Колесо – 4 шт.;
1.7	Руководство по эксплуатации – 1 шт.
2.	Набор мебели медицинской для оснащения процедурного кабинета №2, в составе:
2.1	Стол медицинский инструментальный, в вариантах исполнения (1 шт. из перечня):
2.1.1	Стол медицинский инструментальный с нишей и дверкой, артикул 100173, в составе:
2.1.1.1	Основание – 1 шт.;
2.1.1.2	Заклепка М6 резьбовая – 38 шт.;
2.1.1.3	Винт 6х10 мм – 42 шт.;
2.1.1.4	Футорка М6 – 4 шт.;
2.1.1.5	Боковина – 2 шт.;
2.1.1.6	Замок мебельный – 1 шт.;
2.1.1.7	Ручка врезная – 1 шт.;
2.1.1.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
2.1.1.9	Карточная петля – 2 шт.;
2.1.1.10	Столешница – 1 шт.;
2.1.2	Стол медицинский инструментальный с выдвижным ящиком и дверкой, артикул 100174, в составе:
2.1.2.1	Основание – 1 шт.;
2.1.2.2	Заклепка М6 резьбовая – 52 шт.;
2.1.2.3	Винт 6х10 мм – 56 шт.;
2.1.2.4	Футорка М6 – 4 шт.;
2.1.2.5	Боковина – 2 шт.;
2.1.2.6	Замок мебельный – 1 шт.;
2.1.2.7	Ручка врезная – 2 шт.;
2.1.2.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
2.1.2.9	Карточная петля – 2 шт.;
2.1.2.10	Столешница – 1 шт.;
2.1.3	Стол медицинский инструментальный с тремя выдвижными ящиками, артикул 100175, в составе:
2.1.3.1	Основание – 1 шт.;
2.1.3.2	Заклепка М6 резьбовая – 79 шт.;
2.1.3.3	Винт 6х10 мм – 83 шт.;
2.1.3.4	Футорка М6 – 4 шт.;
2.1.3.5	Боковина – 2 шт.;
2.1.3.6	Замок мебельный – 1 шт.;
2.1.3.7	Ручка врезная – 3 шт.;
2.1.3.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
2.1.3.9	Карточная петля – 2 шт.;
2.1.3.10	Столешница – 1 шт.;
2.1.3.11	Направляющая роликовая – 6 шт.

2.1.4	Стол медицинский инструментальный с двумя нишами и дверками, артикул 100176, в составе:
2.1.4.1	Основание – 1 шт.;
2.1.4.2	Заклепка М6 резьбовая – 54 шт.;
2.1.4.3	Винт 6х10 мм – 58 шт.;
2.1.4.4	Футорка М6 – 4 шт.;
2.1.4.5	Боковина – 3 шт.;
2.1.4.6	Замок мебельный – 2 шт.;
2.1.4.7	Ручка врезная – 2 шт.;
2.1.4.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
2.1.4.9	Карточная петля – 4 шт.;
2.1.4.10	Столешница – 1 шт.;
2.1.5	Стол медицинский инструментальный широкий с двумя выдвижными ящиками и нишей, артикул 100177, в составе:
2.1.5.1	Основание – 1 шт.;
2.1.5.2	Заклепка М6 резьбовая – 65 шт.;
2.1.5.3	Винт 6х10 мм – 69 шт.;
2.1.5.4	Футорка М6 – 4 шт.;
2.1.5.5	Боковина – 2 шт.;
2.1.5.6	Ручка врезная – 2 шт.;
2.1.5.7	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
2.1.5.8	Столешница – 1 шт.;
2.1.5.9	Направляющая роликовая – 4 шт.;
2.1.6	Стол медицинский инструментальный широкий с тремя выдвижными ящиками, артикул 100178, в составе:
2.1.6.1	Основание – 1 шт.;
2.1.6.2	Заклепка М6 резьбовая – 79 шт.;
2.1.6.3	Винт 6х10 мм – 83 шт.;
2.1.6.4	Футорка М6 – 4 шт.;
2.1.6.5	Боковина – 2 шт.;
2.1.6.6	Замок мебельный – 1 шт.;
2.1.6.7	Ручка врезная – 3 шт.;
2.1.6.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
2.1.6.9	Карточная петля – 2 шт.;
2.1.6.10	Столешница – 1 шт.;
2.1.6.11	Направляющая роликовая – 6 шт.;
2.1.7	Стол медицинский инструментальный с двумя выдвижными ящиками и дверками, артикул 100179, в составе:
2.1.7.1	Основание – 1 шт.;
2.1.7.2	Заклепка М6 резьбовая – 80 шт.;
2.1.7.3	Винт 6х10 мм – 86 шт.;
2.1.7.4	Футорка М6 – 6 шт.;
2.1.7.5	Боковина – 3 шт.;
2.1.7.6	Замок мебельный – 2 шт.;
2.1.7.7	Ручка врезная – 4 шт.;
2.1.7.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
2.1.7.9	Карточная петля – 4 шт.;
2.1.7.10	Столешница – 1 шт.;
2.1.8	Стол медицинский инструментальный с четырьмя выдвижными ящиками и дверкой, артикул 100180, в составе:
2.1.8.1	Основание – 1 шт.;
2.1.8.2	Заклепка М6 резьбовая – 107 шт.;
2.1.8.3	Винт 6х10 мм – 116 шт.;
2.1.8.4	Футорка М6 – 6 шт.;
2.1.8.5	Боковина – 3 шт.;
2.1.8.6	Замок мебельный – 1 шт.;

2.1.8.7	Ручка врезная – 5 шт.;
2.1.8.8	Опора колесная 100 мм – 4 шт.;
2.1.8.9	Карточная петля – 2 шт.;
2.1.8.10	Столешница – 1 шт.;
2.1.8.11	Направляющая роликовая – 8 шт.
2.2	Стол медицинский для забора крови, артикул 100172 – 1 шт. (при необходимости), в составе:
2.2.1	Столик- 1 шт.;
2.2.2	Каркас - 1 шт.;
2.2.3	Опора - 2 шт.;
2.2.4	Винт М5 X 35 - 8 шт.;
2.2.5	Шайба 5 - 8 шт.;
2.2.6	Гайка М5 - 8 шт.;
2.2.7	Ножка - 4 шт.;
2.3	Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
2.3.1	Кушетка медицинская смотровая бесступенчатая, артикул 100265, в составе:
2.3.1.1	Ложе – 1 шт.;
2.3.1.2	Стойка левая – 1 шт.;
2.3.1.3	Стойка правая – 1 шт.;
2.3.1.4	Стяжка – 1 шт.;
2.3.1.5	Болт М10х45 – 6 шт.;
2.3.1.6	Шайба – 6 шт.;
2.3.1.7	Заглушка – 4 шт.;
2.3.2	Кушетка медицинская смотровая со ступенчатым подголовником, артикул 100266, в составе:
2.3.2.1	Ложе с каркасом и подголовником – 1 шт.;
2.3.2.2	Ножка – 4 шт.;
2.3.2.3	Гайка М10 – 8 шт.;
2.3.2.4	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;
2.3.2.5	Заглушка – 6 шт.;
2.4	Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
2.4.1	Ширма медицинская передвижная, 1 секция, артикул 100290, в составе:
2.4.1.1	Экран – 1 шт.;
2.4.1.2	Стяжка – 2 шт.;
2.4.1.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
2.4.1.4	Стойка двойная – 1 шт.;
2.4.1.5	Колесо – 3 шт.;
2.4.1.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
2.4.1.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
2.4.1.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
2.4.1.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
2.4.1.10	Шайба 4 – 2 шт.;
2.4.1.11	Гайка М4 – 2 шт.;
2.4.1.12	Заглушка МСК302/4 – 2 шт.;
2.4.2	Ширма медицинская передвижная, 2 секции, артикул 100291, в составе:
2.4.2.1	Экран – 1 шт.;
2.4.2.2	Стяжка – 2 шт.;
2.4.2.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
2.4.2.4	Стойка двойная – 1 шт.;
2.4.2.5	Колесо – 3 шт.;
2.4.2.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
2.4.2.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
2.4.2.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
2.4.2.9	Болт М4х20 – 2 шт.;

2.4.2.10	Шайба 4 – 2 шт.;
2.4.2.11	Гайка М4 – 2 шт.;
2.4.2.12	Заглушка МСК302/4 – 2 шт.;
2.4.3	Ширма медицинская передвижная, 3 секции, артикул 100292, в составе:
2.4.3.1	Экран – 1 шт.;
2.4.3.2	Стяжка – 2 шт.;
2.4.3.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
2.4.3.4	Стойка двойная – 1 шт.;
2.4.3.5	Колесо – 3 шт.;
2.4.3.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
2.4.3.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
2.4.3.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
2.4.3.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
2.4.3.10	Шайба 4 – 2 шт.;
2.4.3.11	Гайка М4 – 2 шт.;
2.4.3.12	Заглушка МСК302/4 – 2 шт.;
2.4.4	Ширма медицинская передвижная, 1 секция, на плоских ножках, артикул 100293, в составе:
2.4.4.1	Экран – 1 шт.;
2.4.4.2	Стяжка – 2 шт.;
2.4.4.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
2.4.4.4	Стойка двойная – 1 шт.;
2.4.4.5	Колесо – 3 шт.;
2.4.4.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
2.4.4.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
2.4.4.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
2.4.4.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
2.4.4.10	Шайба 4 – 2 шт.;
2.4.4.11	Гайка М4 – 2 шт.;
2.4.5	Ширма медицинская передвижная, 2 секции, на плоских ножках, артикул 100294, в составе:
2.4.5.1	Экран – 1 шт.;
2.4.5.2	Стяжка – 2 шт.;
2.4.5.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
2.4.5.4	Стойка двойная – 1 шт.;
2.4.5.5	Колесо – 3 шт.;
2.4.5.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
2.4.5.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
2.4.5.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
2.4.5.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
2.4.5.10	Шайба 4 – 2 шт.;
2.4.5.11	Гайка М4 – 2 шт.;
2.4.6	Ширма медицинская передвижная, 3 секции, на плоских ножках, артикул 100295, в составе:
2.4.6.1	Экран – 1 шт.;
2.4.6.2	Стяжка – 2 шт.;
2.4.6.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
2.4.6.4	Стойка двойная – 1 шт.;
2.4.6.5	Колесо – 3 шт.;
2.4.6.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
2.4.6.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
2.4.6.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
2.4.6.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
2.4.6.10	Шайба 4 – 2 шт.;
2.4.6.11	Гайка М4 – 2 шт.;

2.5	Кровать металлическая передвижная с подголовником, П-образный профиль, артикул 100113 – 1 шт., в составе:
2.5.1	Подматрачная рама – 1 шт.;
2.5.2	Ножка – 2 шт.;
2.5.3	Колесо с тормозом – 2 шт.;
2.5.4	Колесо без тормоза – 2 шт.;
2.5.5	Спинка – 2 шт.;
2.5.6	Отбойник ПВХ – 2 шт.;
2.5.7	Болт мебельный М8х70 – 2 шт.;
2.5.8	Шайба 8 пружинная – 2 шт.;
2.5.9	Гайка М8 – 2 шт.;
2.5.10	Винт М10х30 – 2 шт.;
2.5.11	Шайба 10 пружинная – 2 шт.;
2.5.12	Болт М10х45 – 2 шт.;
2.5.13	Шайба 10 увеличенная – 2 шт.;
2.6	Шкаф медицинский навесной, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
2.6.1	Шкаф медицинский навесной двустворчатый, артикул 100221
2.6.2	Шкаф медицинский навесной двустворчатый остекленный, артикул 100222
2.6.3	Шкаф медицинский навесной двустворчатый с полкой, артикул 100223
2.6.4	Шкаф медицинский навесной двустворчатый остекленный с полкой, артикул 100224
2.7	Руководство по эксплуатации – 1 шт.
3.	Набор мебели медицинской для оснащения процедурного кабинета № 3, в составе:
3.1	Штатив медицинский передвижной с регулировкой высоты, артикул 100298, в составе:
3.1.1	Основание – 1 шт.;
3.1.2	Стойка – 1 шт.;
3.1.3	Держатель – 1 шт.;
3.1.4	Колеса диаметром 50 мм без тормоза – 3 шт.;
3.1.5	Колеса диаметром 50 мм с тормозом – 2 шт.;
3.1.6	Болт 10х30 – 1 шт.;
3.1.7	Винт 10х30 – 5 шт.;
3.1.8	Шайба 10 – 6 шт.;
3.2	Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
3.2.1	Кушетка медицинская смотровая бесступенчатая, артикул 100265, в составе:
3.2.1.1	Ложе – 1 шт.;
3.2.1.2	Стойка левая – 1 шт.;
3.2.1.3	Стойка правая – 1 шт.;
3.2.1.4	Стяжка – 1 шт.;
3.2.1.5	Болт М10х45 – 6 шт.;
3.2.1.6	Шайба – 6 шт.;
3.2.1.7	Заглушка – 4 шт.;
3.2.2	Кушетка медицинская смотровая со ступенчатым подголовником, артикул 100266, в составе:
3.2.2.1	Ложе с каркасом и подголовником – 1 шт.;
3.2.2.2	Ножка – 4 шт.;
3.2.2.3	Гайка М10 – 8 шт.;
3.2.2.4	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;
3.2.2.5	Заглушка – 6 шт.;
3.3	Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
3.3.1	Ширма медицинская передвижная, 1 секция, артикул 100290, в составе:
3.3.1.1	Экран – 1 шт.;
3.3.1.2	Стяжка – 2 шт.;
3.3.1.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
3.3.1.4	Стойка двойная – 1 шт.;
3.3.1.5	Колесо – 3 шт.;

3.3.1.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
3.3.1.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
3.3.1.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
3.3.1.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
3.3.1.10	Шайба 4 – 2 шт.;
3.3.1.11	Гайка М4 – 2 шт.;
3.3.1.12	Заглушка МСК302/4 – 2 шт.;
3.3.2	Ширма медицинская передвижная, 2 секции, артикул 100291, в составе:
3.3.2.1	Экран – 1 шт.;
3.3.2.2	Стяжка – 2 шт.;
3.3.2.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
3.3.2.4	Стойка двойная – 1 шт.;
3.3.2.5	Колесо – 3 шт.;
3.3.2.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
3.3.2.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
3.3.2.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
3.3.2.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
3.3.2.10	Шайба 4 – 2 шт.;
3.3.2.11	Гайка М4 – 2 шт.;
3.3.2.12	Заглушка МСК302/4 – 2 шт.;
3.3.3	Ширма медицинская передвижная, 3 секции, артикул 100292, в составе:
3.3.3.1	Экран – 1 шт.;
3.3.3.2	Стяжка – 2 шт.;
3.3.3.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
3.3.3.4	Стойка двойная – 1 шт.;
3.3.3.5	Колесо – 3 шт.;
3.3.3.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
3.3.3.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
3.3.3.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
3.3.3.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
3.3.3.10	Шайба 4 – 2 шт.;
3.3.3.11	Гайка М4 – 2 шт.;
3.3.3.12	Заглушка МСК302/4 – 2 шт.;
3.3.4	Ширма медицинская передвижная, 1 секция, на плоских ножках, артикул 100293, в составе:
3.3.4.1	Экран – 1 шт.;
3.3.4.2	Стяжка – 2 шт.;
3.3.4.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
3.3.4.4	Стойка двойная – 1 шт.;
3.3.4.5	Колесо – 3 шт.;
3.3.4.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
3.3.4.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
3.3.4.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
3.3.4.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
3.3.4.10	Шайба 4 – 2 шт.;
3.3.4.11	Гайка М4 – 2 шт.;
3.3.5	Ширма медицинская передвижная, 2 секции, на плоских ножках, артикул 100294, в составе:
3.3.5.1	Экран – 1 шт.;
3.3.5.2	Стяжка – 2 шт.;
3.3.5.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
3.3.5.4	Стойка двойная – 1 шт.;
3.3.5.5	Колесо – 3 шт.;
3.3.5.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
3.3.5.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
3.3.5.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;

3.3.5.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
3.3.5.10	Шайба 4 – 2 шт.;
3.3.5.11	Гайка М4 – 2 шт.;
3.3.6	Ширма медицинская передвижная, 3 секции, на плоских ножках, артикул 100295, в составе:
3.3.6.1	Экран – 1 шт.;
3.3.6.2	Стяжка – 2 шт.;
3.3.6.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
3.3.6.4	Стойка двойная – 1 шт.;
3.3.6.5	Колесо – 3 шт.;
3.3.6.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
3.3.6.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
3.3.6.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
3.3.6.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
3.3.6.10	Шайба 4 – 2 шт.;
3.3.6.11	Гайка М4 – 2 шт.;
3.4	Тележка для перевозки больных, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
3.4.1	Тележка для перевозки больных с подголовником, артикул 100262, в составе:
3.4.1.1	Боковина – 2 шт.;
3.4.1.2	Стяжка – 3 шт.;
3.4.1.3	Съемная панель – 1 шт.;
3.4.1.4	Болт М10х45 – 6 шт.;
3.4.1.5	Шайба 10 пружинная – 10 шт.;
3.4.1.6	Винт М10х25 – 4 шт.;
3.4.1.7	Колесо с тормозом, диаметром 125 мм – 2 шт.;
3.4.1.8	Колесо без тормоза, диаметром 125 мм – 2 шт.;
3.4.1.9	Матрац – 1 шт.;
3.4.2	Тележка для перевозки больных со ступенчатым подголовником, артикул 100264, в составе:
3.4.2.1	Боковина – 2 шт.;
3.4.2.2	Стяжка – 3 шт.;
3.4.2.3	Съемная панель – 1 шт.;
3.4.2.4	Болт М10х45 – 6 шт.;
3.4.2.5	Шайба 10 пружинная – 10 шт.;
3.4.2.6	Винт М10х25 – 4 шт.;
3.4.2.7	Колесо с тормозом, диаметром 125 мм – 2 шт.;
3.4.2.8	Колесо без тормоза, диаметром 125 мм – 2 шт.;
3.4.2.9	Матрац – 1 шт.;
3.5	Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
3.5.1	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100236, в составе:
3.5.1.1	Стенка задняя – 1 шт.;
3.5.1.2	Полка – 2 шт.;
3.5.1.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
3.5.1.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
3.5.1.5	Короб – 3 шт.;
3.5.1.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.1.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.1.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.5.1.9	Саморез 4,2х13 – 25 шт.;
3.5.1.10	Саморез 3х17 – 4 шт.;
3.5.1.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
3.5.1.12	Замок мебельный – 1 шт.;
3.5.1.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
3.5.1.14	

3.5.1.15	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.5.1.16	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
3.5.1.17	Полкодержатель – 16 шт.;
3.5.1.18	Гайка М5+Шайба 5 – 11 шт.;
	Винт М5х12 – 16 шт.;
3.5.2	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100237, в составе:
3.5.2.1	Стенка задняя – 1 шт.;
3.5.2.2	Полка – 2 шт.;
3.5.2.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
3.5.2.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
3.5.2.5	Короб – 3 шт.;
3.5.2.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.2.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.2.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.5.2.9	Саморез 4,2х13 – 25 шт.;
3.5.2.10	Саморез 3х17 – 4 шт.;
3.5.2.11	Зашелка магнитная – 2 шт.;
3.5.2.12	Замок мебельный – 1 шт.;
3.5.2.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
3.5.2.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.5.2.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
3.5.2.16	Полкодержатель – 16 шт.;
3.5.2.17	Гайка М5+Шайба 5 – 11 шт.;
3.5.2.18	Винт М5х12 – 16 шт.;
3.5.3	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100238, в составе:
3.5.3.1	Стенка задняя – 2 шт.;
3.5.3.2	Полка – 2 шт.;
3.5.3.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
3.5.3.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
3.5.3.5	Короб – 3 шт.;
3.5.3.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.3.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.3.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.5.3.9	Саморез 4,2х13 – 30 шт.;
3.5.3.10	Саморез 3х17 – 4 шт.;
3.5.3.11	Зашелка магнитная – 2 шт.;
3.5.3.12	Замок мебельный – 1 шт.;
3.5.3.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
3.5.3.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.5.3.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
3.5.3.16	Полкодержатель – 16 шт.;
3.5.3.17	Гайка М5+Шайба 5 – 12 шт.;
3.5.3.18	Винт М5х12 – 27 шт.;
3.5.4	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100239, в составе:
3.5.4.1	Стенка задняя – 2 шт.;
3.5.4.2	Полка – 2 шт.;
3.5.4.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
3.5.4.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
3.5.4.5	Короб – 3 шт.;
3.5.4.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;

3.5.4.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.4.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.5.4.9	Саморез 4,2x13 – 30 шт.;
3.5.4.10	Саморез 3x17 – 4 шт.;
3.5.4.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
3.5.4.12	Замок мебельный – 1 шт.;
3.5.4.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
3.5.4.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.5.4.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
3.5.4.16	Полкодержатель – 16 шт.;
3.5.4.17	Гайка М5+Шайба 5 – 12 шт.;
3.5.4.18	Винт М5х12 – 27 шт.;
3.5.5	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100240, в составе:
3.5.5.1	Стенка задняя – 1 шт.;
3.5.5.2	Полка – 4 шт.;
3.5.5.3	Дверь – 2 шт.;
3.5.5.4	Короб – 3 шт.;
3.5.5.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.5.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.5.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
3.5.5.8	Шайба 5 – 26 шт.;
3.5.5.9	Саморез 3x17 – 4 шт.;
3.5.5.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
3.5.5.11	Замок мебельный – 2 шт.;
3.5.5.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
3.5.5.13	Полкодержатель – 16 шт.;
3.5.5.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.5.6	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100241, в составе:
3.5.6.1	Стенка задняя – 1 шт.;
3.5.6.2	Полка – 4 шт.;
3.5.6.3	Дверь – 2 шт.;
3.5.6.4	Короб – 3 шт.;
3.5.6.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.6.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.6.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
3.5.6.8	Шайба 5 – 26 шт.;
3.5.6.9	Саморез 3x17 – 4 шт.;
3.5.6.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
3.5.6.11	Замок мебельный – 2 шт.;
3.5.6.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
3.5.6.13	Полкодержатель – 16 шт.;
3.5.6.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.5.7	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100242, в составе:
3.5.7.1	Стенка задняя – 1 шт.;
3.5.7.2	Полка – 4 шт.;
3.5.7.3	Дверь – 2 шт.;
3.5.7.4	Короб – 3 шт.;
3.5.7.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.7.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.7.7	Винт М5х12 – 26 шт.;

3.5.7.8	Шайба 5 – 26 шт.;
3.5.7.9	Саморез 3x17 – 4 шт.;
3.5.7.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
3.5.7.11	Замок мебельный – 2 шт.;
3.5.7.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
3.5.7.13	Полкодержатель – 16 шт.;
3.5.7.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.5.8	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100243, в составе:
3.5.8.1	Стенка задняя – 1 шт.;
3.5.8.2	Полка – 4 шт.;
3.5.8.3	Дверь – 2 шт.;
3.5.8.4	Короб – 3 шт.;
3.5.8.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.8.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.8.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
3.5.8.8	Шайба 5 – 26 шт.;
3.5.8.9	Саморез 3x17 – 4 шт.;
3.5.8.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
3.5.8.11	Замок мебельный – 2 шт.;
3.5.8.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
3.5.8.13	Полкодержатель – 16 шт.;
3.5.8.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.5.9	Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100244, в составе:
3.5.9.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.9.2	Полка – 2 шт.;
3.5.9.3	Дверь – 2 шт.;
3.5.9.4	Короб – 3 шт.;
3.5.9.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.9.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.5.9.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.5.9.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.9.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
3.5.9.10	Гайка М5 – 25 шт.;
3.5.9.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
3.5.9.12	Саморез 3x17 – 8 шт.;
3.5.9.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
3.5.9.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.5.9.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.5.9.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.5.9.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.5.9.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.5.9.19	Полкодержатель – 16 шт.;
3.5.10	Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100245, в составе:
3.5.10.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.10.2	Полка – 2 шт.;
3.5.10.3	Дверь – 2 шт.;
3.5.10.4	Короб – 3 шт.;
3.5.10.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.10.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.5.10.7	Полка стеклянная – 2 шт.;

3.5.10.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.10.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
3.5.10.10	Гайка М5 – 25 шт.;
3.5.10.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
3.5.10.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
3.5.10.13	Зашелка магнитная – 4 шт.;
3.5.10.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.5.10.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.5.10.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.5.10.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.5.10.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.5.10.19	Полкодержатель – 16 шт.;
3.5.11	Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100246, в составе:
3.5.11.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.11.2	Полка – 2 шт.;
3.5.11.3	Дверь – 2 шт.;
3.5.11.4	Короб – 3 шт.;
3.5.11.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.11.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.5.11.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.5.11.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.11.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
3.5.11.10	Гайка М5 – 25 шт.;
3.5.11.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
3.5.11.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
3.5.11.13	Зашелка магнитная – 4 шт.;
3.5.11.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.5.11.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.5.11.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.5.11.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.5.11.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.5.11.19	Полкодержатель – 16 шт.;
3.5.12	Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100247, в составе:
3.5.12.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.12.2	Полка – 2 шт.;
3.5.12.3	Дверь – 2 шт.;
3.5.12.4	Короб – 3 шт.;
3.5.12.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.12.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.5.12.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.5.12.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.12.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
3.5.12.10	Гайка М5 – 25 шт.;
3.5.12.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
3.5.12.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
3.5.12.13	Зашелка магнитная – 4 шт.;
3.5.12.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.5.12.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.5.12.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.5.12.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.5.12.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);

3.5.12.19	Полкодержатель – 16 шт.;
3.5.13	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100248, в составе:
3.5.13.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.13.2	Полка – 2 шт.;
3.5.13.3	Дверь – 2 шт.;
3.5.13.4	Короб – 3 шт.;
3.5.13.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.13.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.5.13.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.5.13.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.13.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
3.5.13.10	Гайка М5 – 25 шт.;
3.5.13.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
3.5.13.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
3.5.13.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
3.5.13.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.5.13.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.5.13.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.5.13.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.5.13.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.5.13.19	Полкодержатель – 16 шт.;
3.5.14	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100249, в составе:
3.5.14.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.14.2	Полка – 2 шт.;
3.5.14.3	Дверь – 2 шт.;
3.5.14.4	Короб – 3 шт.;
3.5.14.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.14.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.5.14.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.5.14.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.14.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
3.5.14.10	Гайка М5 – 25 шт.;
3.5.14.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
3.5.14.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
3.5.14.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
3.5.14.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.5.14.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.5.14.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.5.14.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.5.14.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.5.14.19	Полкодержатель – 16 шт.;
3.5.15	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100250, в составе:
3.5.15.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.15.2	Полка – 2 шт.;
3.5.15.3	Дверь – 2 шт.;
3.5.15.4	Короб – 3 шт.;
3.5.15.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.15.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.5.15.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.5.15.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.15.9	Винт М5х12 – 26 шт.;

3.5.15.10	Гайка М5 – 25 шт.;
3.5.15.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
3.5.15.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
3.5.15.13	Зашелка магнитная – 4 шт.;
3.5.15.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.5.15.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.5.15.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.5.15.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.5.15.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.5.15.19	Полкодержатель – 16 шт.;
3.5.16	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100251, в составе:
3.5.16.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.16.2	Полка – 2 шт.;
3.5.16.3	Дверь – 2 шт.;
3.5.16.4	Короб – 3 шт.;
3.5.16.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.5.16.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.5.16.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.5.16.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.5.16.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
3.5.16.10	Гайка М5 – 25 шт.;
3.5.16.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
3.5.16.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
3.5.16.13	Зашелка магнитная – 4 шт.;
3.5.16.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.5.16.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.5.16.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.5.16.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.5.16.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.5.16.19	Полкодержатель – 16 шт.;
3.6	Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4.	Набор мебели медицинской для оснащения процедурного кабинета № 4, в составе:
4.1	Стол медицинский с мойкой, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
4.1.1	Стол медицинский с мойкой и тумбой, широкий, правый, артикул 100191
4.1.2	Стол медицинский с мойкой и тумбой, широкий, левый, артикул 100192
4.2	Стол медицинский, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
4.2.1	Стол медицинский 850х750х750 мм, артикул 100168, в составе:
4.2.1.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
4.2.1.2	Ножка – 4 шт.;
4.2.1.3	Перемычка – 1 шт.;
4.2.1.4	Гайка М10 – 4 шт.;
4.2.1.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
4.2.2	Стол медицинский 1000х750х750 мм, артикул 100169, в составе:
4.2.2.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
4.2.2.2	Ножка – 4 шт.;
4.2.2.3	Перемычка – 1 шт.;
4.2.2.4	Гайка М10 – 4 шт.;
4.2.2.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
4.2.3	Стол медицинский 850х750х750 мм №2, артикул 100170, в составе:
4.2.3.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
4.2.3.2	Ножка – 4 шт.;
4.2.3.3	Перемычка – 1 шт.;
4.2.3.4	Гайка М10 – 4 шт.;

4.2.3.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
4.2.4	Стол медицинский 1000x750x750 мм №2, артикул 100171, в составе:
4.2.4.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
4.2.4.2	Ножка – 4 шт.;
4.2.4.3	Перемычка – 1 шт.;
4.2.4.4	Гайка М10 – 4 шт.;
4.2.4.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
4.3	Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
4.3.1	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100118
4.3.2	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100119, в составе:
4.3.2.1	Стенка боковая – 2 шт.;
4.3.2.2	Дно, верх – 2 шт.;
4.3.2.3	Стенка задняя – 1 шт.;
4.3.2.4	Полка – 1 шт.;
4.3.2.5	Дверь – 1 шт.;
4.3.2.6	Стяжка-ТЕ 15 – 8 шт.;
4.3.2.7	Шток – 8 шт.;
4.3.2.8	Шкант 8x30 – 12 шт.;
4.3.2.9	Петля – 2 шт.;
4.3.2.10	Ручка-скоба – 1 шт.;
4.3.2.11	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
4.3.2.12	Заглушка эксцентрик – 8 шт.;
4.3.2.13	Колесо – 4 шт.;
4.3.3	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100120, в составе:
4.3.3.1	Стенка боковая – 2 шт.;
4.3.3.2	Дно, верх – 2 шт.;
4.3.3.3	Стенка задняя – 1 шт.;
4.3.3.4	Полка – 1 шт.;
4.3.3.5	Дверь – 1 шт.;
4.3.3.6	Стяжка-ТЕ 15 – 12 шт.;
4.3.3.7	Шток – 12 шт.;
4.3.3.8	Шкант 8x30 – 16 шт.;
4.3.3.9	Петля – 2 шт.;
4.3.3.10	Ручка-скоба – 2 шт.;
4.3.3.11	Шуруп 2А3-13 – 36 шт.;
4.3.3.12	Заглушка эксцентрик – 12 шт.;
4.3.3.13	Колесо – 4 шт.;
4.3.3.14	Компл.направляющих – 1 шт.;
4.3.4	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100121
4.3.5	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100122
4.3.6	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой № 2, артикул 100123
4.3.7	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100124
4.3.8	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100125
4.3.9	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100126
4.3.10	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками, артикул 100127
4.3.11	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 2, артикул 100128
4.3.12	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой № 2, артикул 100129, в составе:
4.3.12.1	Стенка боковая – 2 шт.;

4.3.12.2	Дно, верх – 2 шт.;
4.3.12.3	Стенка задняя – 1 шт.;
4.3.12.4	Полка – 1 шт.;
4.3.12.5	Дверь – 1 шт.;
4.3.12.6	Стяжка-ТЕ 15 – 8 шт.;
4.3.12.7	Шток – 8 шт.;
4.3.12.8	Шкант 8х30 – 8 шт.;
4.3.12.9	Петля – 2 шт.;
4.3.12.10	Ручка-скоба – 1 шт.;
4.3.12.11	Шуруп 2А3-13 – 26 шт.;
4.3.12.12	Заглушка эксцентрик – 8 шт.;
4.3.12.13	Колесо – 4 шт.;
4.3.12.14	Полкодержатель – 4 шт.;
4.3.13	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 3, артикул 100130, в составе:
4.3.13.1	Стенка боковая – 2 шт.;
4.3.13.2	Дно, верх – 2 шт.;
4.3.13.3	Стенка задняя – 1 шт.;
4.3.13.4	Ящик – 3 шт.;
4.3.13.5	Стяжка-ТЕ 15 – 20 шт.;
4.3.13.6	Шток – 20 шт.;
4.3.13.7	Шкант 8х30 – 32 шт.;
4.3.13.8	Ручка-скоба – 3 шт.;
4.3.13.9	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
4.3.13.10	Заглушка эксцентрик – 20 шт.;
4.3.13.11	Колесо – 4 шт.;
4.3.13.12	Компл.направляющих – 3 шт.;
4.4	Шкаф медицинский, в вариантах исполнения – 1 шт. из перечня (при необходимости):
4.4.1	Шкаф медицинский с двумя дверьми и пятью полками, с регулируемыми опорами, артикул 100219, в составе:
4.4.1.1	Боковая стенка – 2 шт.;
4.4.1.2	Задняя стенка – 1 шт.;
4.4.1.3	Дно, верх – 2 шт.;
4.4.1.4	Полка – 5 шт.;
4.4.1.5	Дверь – 2 шт.;
4.4.1.6	Конфирмат – 16 шт.;
4.4.1.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
4.4.1.8	Шкант 8х30 – 16 шт.;
4.4.1.9	Петля – 6 шт.;
4.4.1.10	Ручка-скоба – 2 шт.;
4.4.1.11	Шуруп 2А3-13 – 50 шт.;
4.4.1.12	Евровинт V6310 – 24 шт.;
4.4.1.13	Регулируемая опора – 4 шт.;
4.4.1.14	Заглушка конфирмат – 16 шт.;
4.4.1.15	Полкодержатель – 8 шт.;
4.4.1.16	Профиль стыковочный – 1 шт.
4.4.2	Шкаф медицинский двустворчатый, с двумя вертикальными отделениями, с регулируемыми опорами, артикул 100220, в составе:
4.4.2.1	Боковая стенка – 2 шт.;
4.4.2.2	Задняя стенка – 1 шт.;
4.4.2.3	Дно, верх – 2 шт.;
4.4.2.4	Полка – 6 шт.;
4.4.2.5	Дверь – 2 шт.;
4.4.2.6	Штанга – 1 шт.;
4.4.2.7	Перегородка (стойка) – 1 шт.;
4.4.2.8	Конфирмат – 20 шт.;

4.4.2.9	Ключ шестигранный – 1 шт.;
4.4.2.10	Шкант 8х30 – 20 шт.;
4.4.2.11	Петля – 6 шт.;
4.4.2.12	Ручка-скоба – 2 шт.;
4.4.2.13	Шуруп 2А3-13 – 64 шт.;
4.4.2.14	Евровинт V6310 – 24 шт.;
4.4.2.15	Регулируемая опора – 4 шт.;
4.4.2.16	Заглушка конфирмат – 20 шт.;
4.4.2.17	Полкодержатель – 16 шт.;
4.4.2.18	Штангодержатель – 2 шт.
4.4.3	Шкаф медицинский одностворчатый с открытой секцией, артикул 100233, в составе:
4.4.3.1	Боковая стенка – 2 шт.;
4.4.3.2	Задняя стенка – 1 шт.;
4.4.3.3	Дно, верх – 2 шт.;
4.4.3.4	Полка – 4 шт.;
4.4.3.5	Дверь – 1 шт.;
4.4.3.6	Конфирмат – 12 шт.;
4.4.3.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
4.4.3.8	Шкант 8х30 – 12 шт.;
4.4.3.9	Петля – 2 шт.;
4.4.3.10	Ручка-скоба большая – 1 шт.;
4.4.3.11	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
4.4.3.12	Евровинт V6310 – 8 шт.;
4.4.3.13	Регулируемая опора – 4 шт.;
4.4.3.14	Полкодержатель – 12 шт.;
4.4.3.15	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
4.4.4	Шкаф медицинский одностворчатый с двумя дверцами, артикул 100234, в составе:
4.4.4.1	Боковая стенка – 2 шт.;
4.4.4.2	Задняя стенка – 1 шт.;
4.4.4.3	Дно, верх – 2 шт.;
4.4.4.4	Полка – 2 шт.;
4.4.4.5	Полка стеклянная – 2 шт.;
4.4.4.6	Дверь – 2 шт.;
4.4.4.7	Конфирмат – 12 шт.;
4.4.4.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
4.4.4.9	Шкант 8х30 – 12 шт.;
4.4.4.10	Петля – 2 шт.;
4.4.4.11	Петля с доводчиком – 2 шт.;
4.4.4.12	Ручка-скоба большая – 1 шт.;
4.4.4.13	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
4.4.4.14	Евровинт V6310 – 12 шт.;
4.4.4.15	Винт М5х12 – 4 шт.;
4.4.4.16	Регулируемая опора – 4 шт.;
4.4.4.17	Полкодержатель – 4 шт.;
4.4.4.18	Полкодержатель под ст. – 8 шт.;
4.4.4.19	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
4.4.5	Шкаф медицинский двухсекционный, двустворчатый с четырьмя дверцами, артикул 100235, в составе:
4.4.5.1	Боковая стенка – 2 шт.;
4.4.5.2	Задняя стенка – 1 шт.;
4.4.5.3	Дно, верх – 2 шт.;
4.4.5.4	Полка – 2 шт.;
4.4.5.5	Полка стеклянная – 2 шт.;
4.4.5.6	Дверь – 4 шт.;
4.4.5.7	Конфирмат – 12 шт.;
4.4.5.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;

4.4.5.9	Шкант 8х30 – 12 шт.;
4.4.5.10	Петля – 4 шт.;
4.4.5.11	Петля с доводчиком – 2 шт.;
4.4.5.12	Ручка-скоба большая – 2 шт.;
4.4.5.13	Шуруп 2А3-13 – 50 шт.;
4.4.5.14	Евровинт V6310 – 24 шт.;
4.4.5.15	Винт М5х12 – 8 шт.;
4.4.5.16	Регулируемая опора – 4 шт.;
4.4.5.17	Полкодержатель – 12 шт.;
4.4.5.18	Полкодержатель под ст. – 8 шт.;
4.4.5.19	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
4.5	Тумба медицинская под аппаратуру, артикул 100139 - 1 шт. (при необходимости), в составе:
4.5.1	Боковая стенка – 2 шт.;
4.5.2	Задняя стенка – 1 шт.;
4.5.3	Порог – 1 шт.;
4.5.4	Дно, верх – 2 шт.;
4.5.5	Полка – 2 шт.;
4.5.6	Дверь – 2 шт.;
4.5.7	Стяжка- ТЕ 15 – 4 шт.;
4.5.8	Шток – 4 шт.;
4.5.9	Конфирмат – 4 шт.;
4.5.10	Ключ шестигранный – 1 шт.;
4.5.11	Шкант 8х30 – 12 шт.;
4.5.12	Петля – 4 шт.;
4.5.13	Ручка-скоба – 2 шт.;
4.5.14	Шуруп 2А3-13 – 30 шт.;
4.5.15	Подпятник – 4 шт.;
4.5.16	Полкодержатель – 8 шт.;
4.5.17	Заглушка эксцентрик – 4 шт.;
4.5.18	Заглушка конфирмат – 4 шт.;
4.5.19	Профиль стыковочный – 1 шт.;
4.6	Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5.	Набор мебели медицинской для оснащения процедурного кабинета № 5, в составе:
5.1	Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
5.1.1	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100236, в составе:
5.1.1.1	Стенка задняя – 1 шт.;
5.1.1.2	Полка – 2 шт.;
5.1.1.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
5.1.1.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
5.1.1.5	Короб – 3 шт.;
5.1.1.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.1.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.1.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
5.1.1.9	Саморез 4,2х13 – 25 шт.;
5.1.1.10	Саморез 3х17 – 4 шт.;
5.1.1.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
5.1.1.12	Замок мебельный – 1 шт.;
5.1.1.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
5.1.1.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
5.1.1.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
5.1.1.16	Полкодержатель – 16 шт.;
5.1.1.17	Гайка М5+Шайба 5 – 11 шт.;
5.1.1.18	Винт М5х12 – 16 шт.;

5.1.2	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100237, в составе:
5.1.2.1	Стенка задняя – 1 шт.;
5.1.2.2	Полка – 2 шт.;
5.1.2.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
5.1.2.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
5.1.2.5	Короб – 3 шт.;
5.1.2.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.2.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.2.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
5.1.2.9	Саморез 4,2х13 – 25 шт.;
5.1.2.10	Саморез 3х17 – 4 шт.;
5.1.2.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
5.1.2.12	Замок мебельный – 1 шт.;
5.1.2.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
5.1.2.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
5.1.2.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
5.1.2.16	Полкодержатель – 16 шт.;
5.1.2.17	Гайка М5+Шайба 5 – 11 шт.;
5.1.2.18	Винт М5х12 – 16 шт.;
5.1.3	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100238, в составе:
5.1.3.1	Стенка задняя – 2 шт.;
5.1.3.2	Полка – 2 шт.;
5.1.3.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
5.1.3.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
5.1.3.5	Короб – 3 шт.;
5.1.3.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.3.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.3.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
5.1.3.9	Саморез 4,2х13 – 30 шт.;
5.1.3.10	Саморез 3х17 – 4 шт.;
5.1.3.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
5.1.3.12	Замок мебельный – 1 шт.;
5.1.3.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
5.1.3.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
5.1.3.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
5.1.3.16	Полкодержатель – 16 шт.;
5.1.3.17	Гайка М5+Шайба 5 – 12 шт.;
5.1.3.18	Винт М5х12 – 27 шт.;
5.1.4	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100239, в составе:
5.1.4.1	Стенка задняя – 2 шт.;
5.1.4.2	Полка – 2 шт.;
5.1.4.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
5.1.4.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
5.1.4.5	Короб – 3 шт.;
5.1.4.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.4.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.4.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
5.1.4.9	Саморез 4,2х13 – 30 шт.;
5.1.4.10	Саморез 3х17 – 4 шт.;
5.1.4.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
5.1.4.12	Замок мебельный – 1 шт.;

5.1.4.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
5.1.4.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
5.1.4.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
5.1.4.16	Полкодержатель – 16 шт.;
5.1.4.17	Гайка М5+Шайба 5 – 12 шт.;
5.1.4.18	Винт М5х12 – 27 шт.;
5.1.5	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100240, в составе:
5.1.5.1	Стенка задняя – 1 шт.;
5.1.5.2	Полка – 4 шт.;
5.1.5.3	Дверь – 2 шт.;
5.1.5.4	Короб – 3 шт.;
5.1.5.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.5.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.5.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
5.1.5.8	Шайба 5 – 26 шт.;
5.1.5.9	Саморез 3х17 – 4 шт.;
5.1.5.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
5.1.5.11	Замок мебельный – 2 шт.;
5.1.5.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
5.1.5.13	Полкодержатель – 16 шт.;
5.1.5.14	Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости)
5.1.6	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100241, в составе:
5.1.6.1	Стенка задняя – 1 шт.;
5.1.6.2	Полка – 4 шт.;
5.1.6.3	Дверь – 2 шт.;
5.1.6.4	Короб – 3 шт.;
5.1.6.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.6.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.6.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
5.1.6.8	Шайба 5 – 26 шт.;
5.1.6.9	Саморез 3х17 – 4 шт.;
5.1.6.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
5.1.6.11	Замок мебельный – 2 шт.;
5.1.6.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
5.1.6.13	Полкодержатель – 16 шт.;
5.1.6.14	Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости)
5.1.7	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100242, в составе:
5.1.7.1	Стенка задняя – 1 шт.;
5.1.7.2	Полка – 4 шт.;
5.1.7.3	Дверь – 2 шт.;
5.1.7.4	Короб – 3 шт.;
5.1.7.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.7.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.7.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
5.1.7.8	Шайба 5 – 26 шт.;
5.1.7.9	Саморез 3х17 – 4 шт.;
5.1.7.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
5.1.7.11	Замок мебельный – 2 шт.;
5.1.7.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
5.1.7.13	Полкодержатель – 16 шт.;

5.1.7.14	Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости)
5.1.8	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100243, в составе:
5.1.8.1	Стенка задняя – 1 шт.;
5.1.8.2	Полка – 4 шт.;
5.1.8.3	Дверь – 2 шт.;
5.1.8.4	Короб – 3 шт.;
5.1.8.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.8.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.8.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
5.1.8.8	Шайба 5 – 26 шт.;
5.1.8.9	Саморез 3х17 – 4 шт.;
5.1.8.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
5.1.8.11	Замок мебельный – 2 шт.;
5.1.8.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
5.1.8.13	Полкодержатель – 16 шт.;
5.1.8.14	Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости)
5.1.9	Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100244, в составе:
5.1.9.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.9.2	Полка – 2 шт.;
5.1.9.3	Дверь – 2 шт.;
5.1.9.4	Короб – 3 шт.;
5.1.9.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.9.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
5.1.9.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
5.1.9.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.9.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
5.1.9.10	Гайка М5 – 25 шт.;
5.1.9.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
5.1.9.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
5.1.9.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
5.1.9.14	Замок мебельный – 1 шт.;
5.1.9.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
5.1.9.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
5.1.9.17	Петля для стекла – 4 шт.;
5.1.9.18	Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
5.1.9.19	Полкодержатель – 16 шт.;
5.1.10	Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100245, в составе:
5.1.10.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.10.2	Полка – 2 шт.;
5.1.10.3	Дверь – 2 шт.;
5.1.10.4	Короб – 3 шт.;
5.1.10.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.10.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
5.1.10.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
5.1.10.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.10.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
5.1.10.10	Гайка М5 – 25 шт.;
5.1.10.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
5.1.10.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
5.1.10.13	Защелка магнитная – 4 шт.;

5.1.10.14	Замок мебельный – 1 шт.;
5.1.10.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
5.1.10.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
5.1.10.17	Петля для стекла – 4 шт.;
5.1.10.18	Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
5.1.10.19	Полкодержатель – 16 шт.;
5.1.11	Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100246, в составе:
5.1.11.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.11.2	Полка – 2 шт.;
5.1.11.3	Дверь – 2 шт.;
5.1.11.4	Короб – 3 шт.;
5.1.11.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.11.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
5.1.11.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
5.1.11.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.11.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
5.1.11.10	Гайка М5 – 25 шт.;
5.1.11.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
5.1.11.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
5.1.11.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
5.1.11.14	Замок мебельный – 1 шт.;
5.1.11.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
5.1.11.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
5.1.11.17	Петля для стекла – 4 шт.;
5.1.11.18	Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
5.1.11.19	Полкодержатель – 16 шт.;
5.1.12	Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100247, в составе:
5.1.12.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.12.2	Полка – 2 шт.;
5.1.12.3	Дверь – 2 шт.;
5.1.12.4	Короб – 3 шт.;
5.1.12.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.12.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
5.1.12.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
5.1.12.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.12.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
5.1.12.10	Гайка М5 – 25 шт.;
5.1.12.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
5.1.12.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
5.1.12.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
5.1.12.14	Замок мебельный – 1 шт.;
5.1.12.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
5.1.12.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
5.1.12.17	Петля для стекла – 4 шт.;
5.1.12.18	Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
5.1.12.19	Полкодержатель – 16 шт.;
5.1.13	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100248, в составе:
5.1.13.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.13.2	Полка – 2 шт.;
5.1.13.3	Дверь – 2 шт.;

5.1.13.4	Короб – 3 шт.;
5.1.13.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.13.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
5.1.13.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
5.1.13.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.13.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
5.1.13.10	Гайка М5 – 25 шт.;
5.1.13.11	Саморез 4.2х13 – 20 шт.;
5.1.13.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
5.1.13.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
5.1.13.14	Замок мебельный – 1 шт.;
5.1.13.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
5.1.13.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
5.1.13.17	Петля для стекла – 4 шт.;
5.1.13.18	Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
5.1.13.19	Полкодержатель – 16 шт.;
5.1.14	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100249, в составе:
5.1.14.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.14.2	Полка – 2 шт.;
5.1.14.3	Дверь – 2 шт.;
5.1.14.4	Короб – 3 шт.;
5.1.14.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.14.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
5.1.14.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
5.1.14.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.14.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
5.1.14.10	Гайка М5 – 25 шт.;
5.1.14.11	Саморез 4.2х13 – 20 шт.;
5.1.14.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
5.1.14.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
5.1.14.14	Замок мебельный – 1 шт.;
5.1.14.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
5.1.14.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
5.1.14.17	Петля для стекла – 4 шт.;
5.1.14.18	Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
5.1.14.19	Полкодержатель – 16 шт.;
5.1.15	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100250, в составе:
5.1.15.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.15.2	Полка – 2 шт.;
5.1.15.3	Дверь – 2 шт.;
5.1.15.4	Короб – 3 шт.;
5.1.15.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.15.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
5.1.15.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
5.1.15.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.15.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
5.1.15.10	Гайка М5 – 25 шт.;
5.1.15.11	Саморез 4.2х13 – 23 шт.;
5.1.15.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
5.1.15.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
5.1.15.14	Замок мебельный – 1 шт.;
5.1.15.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;

5.1.15.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
5.1.15.17	Петля для стекла – 4 шт.;
5.1.15.18	Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
5.1.15.19	Полкодержатель – 16 шт.;
5.1.16	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100251, в составе:
5.1.16.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.16.2	Полка – 2 шт.;
5.1.16.3	Дверь – 2 шт.;
5.1.16.4	Короб – 3 шт.;
5.1.16.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
5.1.16.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
5.1.16.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
5.1.16.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
5.1.16.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
5.1.16.10	Гайка М5 – 25 шт.;
5.1.16.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
5.1.16.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
5.1.16.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
5.1.16.14	Замок мебельный – 1 шт.;
5.1.16.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
5.1.16.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
5.1.16.17	Петля для стекла – 4 шт.;
5.1.16.18	Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.) – 1 шт. (при необходимости);
5.1.16.19	Полкодержатель – 16 шт.;
5.2	Стол врача для проведения терапевтических процедур, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
5.2.1	Стол врача для проведения терапевтических процедур 1200х600х750 мм, артикул 100140, в составе:
5.2.1.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.1.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.1.3	Столешница – 1 шт.;
5.2.1.4	Перемычка – 1 шт.;
5.2.1.5	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.1.6	Шуруп 2А3-13 – 20 шт.;
5.2.1.7	Опора регулируемая – 4 шт.;
5.2.1.8	Уголок крепежный – 10 шт.
5.2.2	Стол врача для проведения терапевтических процедур 1400х600х750 мм, артикул 100141, в составе:
5.2.2.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.2.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.2.3	Столешница – 1 шт.;
5.2.2.4	Перемычка – 1 шт.;
5.2.2.5	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.2.6	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
5.2.2.7	Опора регулируемая – 4 шт.;
5.2.2.8	Уголок крепежный – 12 шт.
5.2.3	Стол врача для проведения терапевтических процедур с тумбой 1200х600х750 мм, артикул 100142, в составе:
5.2.3.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.3.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.3.3	Столешница – 1 шт.;
5.2.3.4	Дверка – 1 шт.;
5.2.3.5	Полка – 1 шт.;

5.2.3.6	Ручка – 1 шт.;
5.2.3.7	Переключатель – 1 шт.;
5.2.3.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.3.9	Шуруп 2А3-13 – 20 шт.;
5.2.3.10	Опора регулируемая – 6 шт.;
5.2.3.11	Уголок крепежный – 10 шт.;
5.2.3.12	Полкодержатель – 4 шт.
5.2.4	Стол врача для проведения терапевтических процедур с тумбой 1400х600х750 мм, артикул 100143, в составе:
5.2.4.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.4.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.4.3	Столешница – 1 шт.;
5.2.4.4	Дверка – 1 шт.;
5.2.4.5	Полка – 1 шт.;
5.2.4.6	Ручка – 1 шт.;
5.2.4.7	Переключатель – 1 шт.;
5.2.4.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.4.9	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
5.2.4.10	Опора регулируемая – 6 шт.;
5.2.4.11	Уголок крепежный – 12 шт.;
5.2.4.12	Полкодержатель – 4 шт.
5.2.5	Стол врача для проведения терапевтических процедур с тремя ящиками, артикул 100144, в составе:
5.2.5.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.5.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.5.3	Столешница – 1 шт.;
5.2.5.4	Ящик – 3 шт.;
5.2.5.5	Ручка – 3 шт.;
5.2.5.6	Переключатель – 1 шт.;
5.2.5.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.5.8	Шуруп 2А3-13 – 64 шт.;
5.2.5.9	Опора регулируемая – 6 шт.;
5.2.5.10	Уголок крепежный – 10 шт.;
5.2.6	Стол врача для проведения терапевтических процедур 1200х600х750 мм № 2, артикул 100145, в составе:
5.2.6.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.6.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.6.3	Столешница – 1 шт.;
5.2.6.4	Переключатель – 1 шт.;
5.2.6.5	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.6.6	Шуруп 2А3-13 – 20 шт.;
5.2.6.7	Опора регулируемая – 4 шт.;
5.2.6.8	Уголок крепежный – 10 шт.
5.2.7	Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с тремя ящиками, артикул 100146, в составе:
5.2.7.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.7.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.7.3	Столешница – 1 шт.;
5.2.7.4	Ящик – 3 шт.;
5.2.7.5	Ручка – 3 шт.;
5.2.7.6	Переключатель – 1 шт.;
5.2.7.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.7.8	Шуруп 2А3-13 – 68 шт.;
5.2.7.9	Опора регулируемая – 6 шт.;
5.2.7.10	Уголок крепежный – 12 шт.;

5.2.8	Стол врача для проведения терапевтических процедур 1400x700x750 мм, артикул 100147, в составе:
5.2.8.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.8.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.8.3	Столешница – 1 шт.;
5.2.8.4	Перемишка – 1 шт.;
5.2.8.5	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.8.6	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
5.2.8.7	Опора регулируемая – 4 шт.;
5.2.8.8	Уголок крепежный – 12 шт.
5.2.9	Стол врача для проведения терапевтических процедур двутумбовый с тремя ящиками и тумбой, артикул 100148, в составе:
5.2.9.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.9.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.9.3	Столешница – 1 шт.;
5.2.9.4	Ящик – 3 шт.;
5.2.9.5	Ручка – 3 шт.;
5.2.9.6	Дверь – 1 шт.;
5.2.9.7	Полка – 1 шт.;
5.2.9.8	Перемишка – 1 шт.;
5.2.9.9	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.9.10	Шуруп 2А3-13 – 68 шт.;
5.2.9.11	Опора регулируемая – 8 шт.;
5.2.9.12	Уголок крепежный – 12 шт.;
5.2.9.13	Полкодержатель – 4 шт.
5.2.10	Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с дверцей, артикул 100149, в составе:
5.2.10.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.10.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.10.3	Столешница – 1 шт.;
5.2.10.4	Дверка – 1 шт.;
5.2.10.5	Полка – 1 шт.;
5.2.10.6	Ручка – 1 шт.;
5.2.10.7	Перемишка – 1 шт.;
5.2.10.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.10.9	Шуруп 2А3-13 – 20 шт.;
5.2.10.10	Опора регулируемая – 6 шт.;
5.2.10.11	Уголок крепежный – 10 шт.;
5.2.10.12	Полкодержатель – 4 шт.
5.2.11	Стол врача для проведения терапевтических процедур со встроенной тумбой с дверцей, артикул 100150, в составе:
5.2.11.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.11.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.11.3	Столешница – 1 шт.;
5.2.11.4	Дверка – 1 шт.;
5.2.11.5	Полка – 1 шт.;
5.2.11.6	Ручка – 1 шт.;
5.2.11.7	Перемишка – 1 шт.;
5.2.11.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.11.9	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
5.2.11.10	Опора регулируемая – 6 шт.;
5.2.11.11	Уголок крепежный – 12 шт.;
5.2.11.12	Полкодержатель – 4 шт.
5.2.12	Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с тремя ящиками 1200x600x750 мм, артикул 100151, в составе:
5.2.12.1	Боковая стенка – 2 шт.;

5.2.12.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.12.3	Столешница – 1 шт.;
5.2.12.4	Ящик – 3 шт.;
5.2.12.5	Ручка – 3 шт.;
5.2.12.6	Перемышка – 1 шт.;
5.2.12.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.12.8	Шуруп 2А3-13 – 64 шт.;
5.2.12.9	Опора регулируемая – 6 шт.;
5.2.12.10	Уголок крепежный – 10 шт.;
5.2.13	Стол врача для проведения терапевтических процедур однотумбовый с тремя ящиками 1400x700x750 мм, артикул 100152, в составе:
5.2.13.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.13.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.13.3	Столешница – 1 шт.;
5.2.13.4	Ящик – 3 шт.;
5.2.13.5	Ручка – 3 шт.;
5.2.13.6	Перемышка – 1 шт.;
5.2.13.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.13.8	Шуруп 2А3-13 – 68 шт.;
5.2.13.9	Опора регулируемая – 6 шт.;
5.2.13.10	Уголок крепежный – 12 шт.;
5.2.14	Стол врача для проведения терапевтических процедур двутумбовый, с тремя ящиками в одной и с дверкой в другой, артикул 100153, в составе:
5.2.14.1	Боковая стенка – 2 шт.;
5.2.14.2	Задняя стенка – 1 шт.;
5.2.14.3	Столешница – 1 шт.;
5.2.14.4	Ящик – 3 шт.;
5.2.14.5	Ручка – 3 шт.;
5.2.14.6	Дверь – 1 шт.;
5.2.14.7	Полка – 1 шт.;
5.2.14.8	Перемышка – 1 шт.;
5.2.14.9	Ключ шестигранный – 1 шт.;
5.2.14.10	Шуруп 2А3-13 – 68 шт.;
5.2.14.11	Опора регулируемая – 8 шт.;
5.2.14.12	Уголок крепежный – 12 шт.;
5.2.14.13	Полкодержатель – 4 шт.;
5.3	Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
5.3.1	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100118
5.3.2	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100119, в составе:
5.3.2.1	Стенка боковая – 2 шт.;
5.3.2.2	Дно, верх – 2 шт.;
5.3.2.3	Стенка задняя – 1 шт.;
5.3.2.4	Полка – 1 шт.;
5.3.2.5	Дверь – 1 шт.;
5.3.2.6	Стяжка-ТЕ 15 – 8 шт.;
5.3.2.7	Шток – 8 шт.;
5.3.2.8	Шкант 8x30 – 12 шт.;
5.3.2.9	Петля – 2 шт.;
5.3.2.10	Ручка-скоба – 1 шт.;
5.3.2.11	Шуруп 2А3-13 – 24 шт.;
5.3.2.12	Заглушка эксцентрик – 8 шт.;
5.3.2.13	Колесо – 4 шт.;

5.3.3	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100120, в составе:
5.3.3.1	Стенка боковая – 2 шт.;
5.3.3.2	Дно, верх – 2 шт.;
5.3.3.3	Стенка задняя – 1 шт.;
5.3.3.4	Полка – 1 шт.;
5.3.3.5	Дверь – 1 шт.;
5.3.3.6	Стяжка-ТЕ 15 – 12 шт.;
5.3.3.7	Шток – 12 шт.;
5.3.3.8	Шкант 8х30 – 16 шт.;
5.3.3.9	Петля – 2 шт.;
5.3.3.10	Ручка-скоба – 2 шт.;
5.3.3.11	Шуруп 2А3-13 – 36 шт.;
5.3.3.12	Заглушка эксцентрик – 12 шт.;
5.3.3.13	Колесо – 4 шт.;
5.3.3.14	Компл.направляющих – 1 шт.;
5.3.4	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100121
5.3.5	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100122
5.3.6	Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой № 2, артикул 100123
5.3.7	Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100124
5.3.8	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100125
5.3.9	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100126
5.3.10	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками, артикул 100127
5.3.11	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 2, артикул 100128
5.3.12	Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой № 2, артикул 100129, в составе:
5.3.12.1	Стенка боковая – 2 шт.;
5.3.12.2	Дно, верх – 2 шт.;
5.3.12.3	Стенка задняя – 1 шт.;
5.3.12.4	Полка – 1 шт.;
5.3.12.5	Дверь – 1 шт.;
5.3.12.6	Стяжка-ТЕ 15 – 8 шт.;
5.3.12.7	Шток – 8 шт.;
5.3.12.8	Шкант 8х30 – 8 шт.;
5.3.12.9	Петля – 2 шт.;
5.3.12.10	Ручка-скоба – 1 шт.;
5.3.12.11	Шуруп 2А3-13 – 26 шт.;
5.3.12.12	Заглушка эксцентрик – 8 шт.;
5.3.12.13	Колесо – 4 шт.;
5.3.12.14	Полкодержатель – 4 шт.;
5.3.13	Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 3, артикул 100130, в составе:
5.3.13.1	Стенка боковая – 2 шт.;
5.3.13.2	Дно, верх – 2 шт.;
5.3.13.3	Стенка задняя – 1 шт.;
5.3.13.4	Ящик – 3 шт.;
5.3.13.5	Стяжка-ТЕ 15 – 20 шт.;
5.3.13.6	Шток – 20 шт.;
5.3.13.7	Шкант 8х30 – 32 шт.;
5.3.13.8	Ручка-скоба – 3 шт.;
5.3.13.9	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
5.3.13.10	Заглушка эксцентрик – 20 шт.;

5.3.13.11	Колесо – 4 шт.;
5.3.13.12	Компл.направляющих – 3 шт.;
5.4	Тележка для перевозки больных, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
5.4.1	Тележка для перевозки больных с подголовником, артикул 100262, в составе:
5.4.1.1	Боковина – 2 шт.;
5.4.1.2	Стяжка – 3 шт.;
5.4.1.3	Съемная панель – 1 шт.;
5.4.1.4	Болт М10х45 – 6 шт.;
5.4.1.5	Шайба 10 пружинная – 10 шт.;
5.4.1.6	Винт М10х25 – 4 шт.;
5.4.1.7	Колесо с тормозом, диаметром 125 мм – 2 шт.;
5.4.1.8	Колесо без тормоза, диаметром 125 мм – 2 шт.;
5.4.1.9	Матрац – 1 шт.;
5.4.2	Тележка для перевозки больных со ступенчатым подголовником, артикул 100264, в составе:
5.4.2.1	Боковина – 2 шт.;
5.4.2.2	Стяжка – 3 шт.;
5.4.2.3	Съемная панель – 1 шт.;
5.4.2.4	Болт М10х45 – 6 шт.;
5.4.2.5	Шайба 10 пружинная – 10 шт.;
5.4.2.6	Винт М10х25 – 4 шт.;
5.4.2.7	Колесо с тормозом, диаметром 125 мм – 2 шт.;
5.4.2.8	Колесо без тормоза, диаметром 125 мм – 2 шт.;
5.4.2.9	Матрац – 1 шт.;
5.5	Руководство по эксплуатации – 1 шт.

2. Показания для применения медицинского изделия.

Кровать стационарная с подголовником предназначена для размещения пациентов при осмотре и проведении процедур в медицинских кабинетах.

Кровать металлическая передвижная с подголовником предназначена для размещения пациентов при осмотре и проведении процедур в медицинских кабинетах и для перемещения между кабинетами.

Тумба медицинская подкатная предназначена для размещения, хранения и перемещения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур различных изделий медицинского и лабораторного назначения и медикаментов.

Тумба медицинская под аппаратуру предназначена для размещения и хранения медицинского и лабораторного оборудования.

Стол медицинский подкатной предназначен для размещения, хранения и перемещения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Стол медицинский предназначен для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Стол медицинский для забора крови предназначен для размещения медикаментов, расходных материалов и проведения процедур забора крови.

Стол медицинский инструментальный предназначен для размещения и хранения инструментов, медикаментов, приспособлений, используемых при проведении процедур.

Стол медицинский с мойкой предназначен для организации места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств.

Шкаф медицинский и шкаф медицинский навесной предназначен для организации хранения различных изделий медицинского и лабораторного назначения и медикаментов.

Шкаф для медикаментов предназначен для размещения и хранения медикаментов и приспособлений к ним, используемых при проведении процедур.

Тележка для перевозки больных предназначена для перемещения пациентов между кабинетами.

Кушетка медицинская смотровая предназначена для размещения пациентов при осмотре и проведении процедур в медицинских кабинетах.

Ширма медицинская стационарная и ширма медицинская передвижная предназначены для организации защищенного от посторонних взглядов пространства при проведении осмотра пациентов в медицинских кабинетах.

Штатив медицинский передвижной регулировкой высоты предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур.

3. Противопоказания для применения медицинского изделия.

- Не использовать изделие не по назначению.
- При эксплуатации изделия не допускается превышать допустимые нагрузки.
- Запрещается пользоваться сломанным изделием или изделием после истечения его срока службы.

4. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно данного руководства - побочные действия отсутствуют.

5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на упаковке.
- Не проводите по поверхности и не ударяйте их острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери и полки необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденную стеклодеталь;
- Во избежание опрокидывания мебели запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно;
- При базировании изделия на полу должна быть обеспечена его устойчивость от опрокидывания, перекосов, раскачивания не допускается.

6. Технические характеристики медицинского изделия.

Габаритные размеры, масса изделий и конструктивные особенности соответствуют, приведенным в Приложении 1.

Двери открываются и закрываются плавно, без заедания и перекосов с усилием не более 10Н (1 кгс).

Ящики установлены на роликовых или шариковых направляющих и имеют устройство, предотвращающее их выпадение при выдвижении. Ящики выдвигаются плавно, без перекосов и заедания с усилием не более 10 (1 кгс).

Замки дверей и ящиков неподвижно и прочно закреплены и установлены так, что обеспечивает их легкое отпирание и запирание, а также плотное прилегание дверей и ящиков к корпусу.

Двери без замков имеют устройство, предотвращающее их самопроизвольное открывание.

Набор, в зависимости от модификации, установлен на колеса, либо регулируемые, либо нерегулируемые опоры.

Усилие включения тормоза колес не превышает 150 Н (15 кгс).

Усилие трогания с места не более, указанного в таблице 2.

Изделия при заторможенных колесных опорах с размещенной на них предельной рабочей нагрузкой не смещаются при приложении усилия, указанного в таблице 1.

Таблица 1.

Масса изделия (см. Приложение 1)	Усилие трогания, не более, Н (кгс)	Усилие смещения при заторможенных колёсных опорах, не менее, Н (кгс)
Менее 50 кг	60 (6)	115 (11,5)
50-100 кг	125 (12,5)	235 (23,5)

Усилие перемещения Набора на колесах по горизонтальному бесшовному полу без нагрузки не превышает 50Н (5 кгс).

Набор стоит устойчиво на ровной горизонтальной поверхности пола, при этом зазор между полом и одной из опор не превышает 3 мм.

Элементы Набора выдерживают полуторакратную равномерно распределенную нагрузку.

Величины нагрузок:

- на столешницу, полку тумбы из ЛДСП, МДФ не более 10 кг, на тумбу не более 25 кг;
- на столешницу, полку тумбы металлические не более 15 кг;
- на дно ящика из ЛДСП не более 5 кг;
- на дно ящика металлическое не более 10 кг;
- на полку тумбы, дно ящика не более 10 кг;
- на полку шкафа из ЛДСП не более 15 кг;
- на полку шкафа из стекла не более 5 кг;
- на полку шкафа металлическую не более 15 кг;
- на столешницу столов медицинских для врача, столов медицинских и столов медицинской сестры не более 80 кг;
- на столешницу столов медицинских инструментальных не более 100 кг, на полку не более 50 кг;
- на ступеньки подставки не более 85 кг;
- на полку шкафа-стеллажа металлическую не более 100 кг, а на секцию не более 400 кг.
- на штатив не менее 5 кг;
- кушетка должна выдерживать предельную рабочую нагрузку не менее 130 кг;
- тележка должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой не менее 150 кг.

Влажность деталей из древесных материалов $(8 \pm 2) \%$.

Толщина полок из стекла соответствует ГОСТ 16371.

Гидравлическая система и пневмопривод герметичны. Не допускается наличие подтеков рабочей жидкости.

Самопроизвольное опускание элементов изделий с гидравлической системой/ пневмоприводом не допускается.

Усилие, прикладываемое к педали гидропривода не превышает 250 Н (25 кгс).

Усилие, прикладываемое к рукоятке пневмопружины не превышает 10 Н (1 кгс).

Поверхность Набора не имеет трещин, вмятин, следов коррозии, острых кромок, заусенцев, клеевых пятен, подтеков, разнооттеночности и других дефектов, ухудшающих ее товарный вид. Мягкая поверхность изделия не имеет морщин, складок, разрывов материала. Мягкая поверхность изделия не должна иметь морщин, складок, разрывов материала. Покрытия металлических деталей должны быть однотонными, без кратеров, пузырей, включений, отслаивания пленки и должны соответствовать требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

Металлические и неметаллические неорганические покрытия однотонные, без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и соответствуют требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I.

Лакокрасочные покрытия соответствуют ГОСТ 9.032 для условий эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104. Наружные поверхности имеют покрытия не ниже IV класса, внутренние — не ниже VI.

Наружные поверхности оборудования устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113, 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0.5% моющего средства по ГОСТ 25644 или 1%-ным раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

При изготовлении Набора используются следующие материалы:

Кровать стационарная с подголовником изготавливается из следующих материалов:

- каркас, рамы: прямоугольный стальной профиль по ГОСТ 13663-86 производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Сварная сетка по ГОСТ 23279-85, производства ООО «Ижстройснаб», Россия. Ложе, спинка: стальная труба по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия. Стальной уголок, производства АО «Металлургический завод Балаково». Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Регулировка наклона подголовника - механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100108, 100109, 100110, 1001011).

Кровать металлическая передвижная с подголовником. П-образный профиль (100113) изготавливается из следующих материалов: каркас и рамы: прямоугольный стальной профиль по ГОСТ 13663-86 производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Стальной уголок, производства АО «Металлургический завод Балаково». Ложе, спинка: стальная труба по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия. Сварная сетка по ГОСТ 23279-85, производства ООО «Ижстройснаб», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия, диаметр 100. Ступенчатая рейка из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100113).

Тумба медицинская подкатная изготавливается из следующих материалов:

- каркас: стальная труба по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия; корпус, дверь и ящик: листовая сталь толщиной 0.8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Ручки на двери и ящика: металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. (100118).

- каркас, ящик, дверь, полка из влагостойкой ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) белого цвета по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства

ООО «ФМС», Россия. Ручки на двери и ящика: металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. (100119, 100120, 100129, 100130);

- каркас: алюминиевый профиль, производства ООО «Алюмторг». Верх, низ и фасад - МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) белого цвета по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейted Вуд Индастри», Россия. Задняя и боковые стенки: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. Ручки на двери и ящика: металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. (100121, 100122, 100123, 100124, 100125, 100126, 100127, 100128).

Тумба медицинская под аппаратуру (100139) изготавливается из следующих материалов: корпус, двери, полки: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) белого цвета по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Ручки на дверях: стальные, модель UP, производства «GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED», Китай. Нерегулируемые стальные опоры, производства ООО «ФМС», Россия.

Стол медицинский подкатной, в зависимости от модификации изготавливается из следующих материалов:

- каркас: стальной профиль квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Столешница: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Кромочная лента: ПВХ серого цвета толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия (100164, 100165);

- каркас: стальной профиль квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО «Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Столешница: полиэтилен низкого давления, производства ОАО «Казаньоргсинтез», Россия (ТУ 2243-188-00203335-2009). Телескопическое устройство из пластика и стали, производства ООО «ФМС», Россия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия (100166);

- каркас: стальной профиль квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Столешница: МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейted Вуд Индастри», Россия. Кромочная лента: ПВХ серого цвета толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия (100167).

Стол медицинский изготавливается из следующих материалов: каркас: стальной профиль квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Столешница: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Кромочная лента: ПВХ серого цвета толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия (100168, 100169, 100170, 100171).

Стол медицинский для забора крови (100172) изготавливается из следующих материалов: каркас: стальной профиль квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Столешница: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Регулируемые опоры из стали и пластика, производства ООО «ФМС», Россия. Обивка: винилискожа бежевого цвета производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай.

Стол медицинский инструментальный изготавливается из: каркас / ящик / дверь / полка: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Цвет фасадов может быть другим: бирюзовый (RAL 6027), голубой (RAL 5024). Столешница с бортиками: формованный листовой АБС-пластик по ГОСТ Р56404-2015, производства ООО «Промполимер», Россия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. Опора колесная подшипниковая с пятой, арт.8000701, Ø100 мм. Ручки на ящике и двери: металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Резьбовые заклепки стальные, производства ООО «Управляющая компания «Фиксит», Россия (ТУ 1680-001-30391216-2011) (100173, 100174, 100175, 100176, 100177, 100178, 100179, 100180).

Стол медицинский с мойкой изготавливается из:

- каркас, панели, двери, полки: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Цвет фасадов может быть другим: бирюзовый (RAL 6027), голубой (RAL 5024). Столешница: постформинг, производства ООО «Казаньоргсинтез», Россия (ТУ 2243-188-00203335-2009). Мойка из нержавеющей стали, производства Guangdong Zhenpeng Kitchen and Sanitary Ware Co. Ltd, Китай. Резьбовые заклепки стальные, производства ООО «Управляющая компания «Фиксит», Россия (ТУ 1680-001-30391216-2011). Экран: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC» с перфорацией. Накладная петля стальная с доводчиком марки BOYARD, производства ООО «Боярд», Россия. Регулируемые опоры со штырем M10, материал сталь, производства ООО «ФМС», Россия (100191, 100192).

Шкаф медицинский в зависимости от модификации изготавливается из:

- корпус / полки: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг». Дверь / фасад: МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Кромочная лента: ПВХ толщиной 2 мм серого цвета, производства Surteco GmbH, Германия. Петли стальные с доводчиком производства ООО «ФМС», Россия. Ручка на двери модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Регулируемые

опоры со штырем М10, материал сталь и пластик, производства ООО «ФМС», Россия (100219, 100220);

- корпус: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) мм по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг». Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Полки и фасад нижнего отделения: МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида Е1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Ручки на дверях: модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Петли с доводчиком производства ООО «ФМС», материал сталь, пластик, Россия. Регулируемые опоры со штырем М10, материал сталь и пластик, производства ООО «ФМС», Россия (100233);

- корпус: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг». Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Нижний фасад: МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида Е1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Ручки на дверях: модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Петли с доводчиком производства ООО «ФМС», материал сталь, пластик, Россия. Регулируемые опоры со штырем М10, материал сталь и пластик, производства ООО «ФМС», Россия. Верхняя дверь: закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014, производства ООО «Производственная база «Август», Россия (100234);

- корпус и полки: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) мм серого цвета по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Фасады (двери нижние): МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида Е1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) серого цвета по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Кромочная лента: ПВХ толщиной 2 мм серого цвета, производства Surteco GmbH, Германия. Петли с доводчиком (для дверей из МДФ): материал – сталь, пластик, производства ООО «ФМС», Россия. Двери верхние: закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014, производства ООО «Производственная база «Август», Россия. Алюминиевый профиль, производства ООО «Алюмторг», Россия. Петли с доводчиком (для дверей из стекла): сталь, производства ООО «ФМС», Россия. Ручки на дверях: модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Регулируемые опоры со штырем М10, материал сталь и пластик, производства ООО «ФМС», Россия (100235).

Шкаф медицинский навесной, в зависимости от модификации изготавливается из:

- каркас: алюминиевый профиль производства ООО «Алюмторг», Россия. Корпус и полка: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг». Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Петли стальные производства ООО «ФМС», Россия. Ручки на дверях: стальные, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай (100221, 100223);

- каркас: алюминиевый профиль, производства ООО «Алюмторг», Россия. Корпус: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) белого цвета по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Дверь и

полка: закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014, производства ООО «Производственная база «Август», Россия. Ручки на дверях: стальные, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай (100222, 100224).

Шкаф для медикаментов, в зависимости от модификации изготавливается из:

- каркас, двери и полки: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех». Верхняя секция и полки: закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014, производства ООО «Производственная база «Август», Россия. Ручки на дверях модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Петли с доводчиком (для стекла): стальные, производства ООО «ФМС», Россия. Металлические пластинчатые полкодержатели, производства ООО «ФМС», Россия. Опоры: из стали и пластика, производства ООО «ФМС», Россия (100236, 100237, 100238, 100239, 100244, 100245, 100246, 100247);

- каркас, двери и полки: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех». Металлические пластинчатые полкодержатели, производства ООО «ФМС», Россия. Опоры: из стали и пластика, производства ООО «ФМС», Россия (100240, 100241, 100242, 100243, 100248, 100251, 100249, 100250).

Тележка для перевозки больных изготавливается из следующих материалов: каркас: тонкостенный стальной профиль по ГОСТ 13663-86, производства ООО Выксунский металлургический завод, Россия. Съемная панель: сварная сетка из стали по ГОСТ 23279-85, производства ООО «Ижстройснаб», Россия. Матрац: эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020), чехол из винилискожи белого цвета, производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. Механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100262, 100264).

Кушетка медицинская смотровая в зависимости от модификации изготавливается из следующих материалов:

- каркас (усиленный): прямоугольный стальной профиль по ГОСТ 13663-86 производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Ложе: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия. Обивка: эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020). Чехол из винилискожи белого цвета, производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай. Регулировка наклона подголовника – механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100265);

- каркас (усиленный): стальной профиль по ГОСТ 8639-82, ГОСТ 30245-2003, производства ООО «Феррум», Россия. Ножки: стальная опора Ø51 с приварным фланцем в сборе, производства ООО «ФМС», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Подголовник и ложе: фанера, производства ООО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», Россия; эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020); чехол из винилискожи бежевого цвета производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай. Механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100266).

Ширма медицинская стационарная изготавливается из следующих материалов: каркас: стальная труба по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия; усиление труба стальная квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО Выксунский металлургический завод, Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Полотно секций: пленка ПВХ, производства ООО «Трасса-С», Россия (ТУ

22.21.30-002-48184618-2022). Заглушки полипропиленовые, производства ООО «ФМС», Россия (100284, 100285, 100286, 100287, 100288, 100289).

Ширма медицинская передвижная изготавливается из следующих материалов: каркас: стальная труба круглого сечения по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия; усиление труба стальная квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Полотно секций: пленка ПВХ, производства ООО «Трасса-С», Россия (ТУ 22.21.30-002-48184618-2022). Заглушки полипропиленовые, производства ООО «ФМС», Россия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия диаметр 75 (100290, 100291, 100292, 100293, 100294, 100295).

Штатив медицинский передвижной с регулировкой высоты изготавливается из: каркас: стальная труба по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия (100298).

7. Комплектность медицинского изделия.

Комплект поставки набора должен соответствовать указанному в Таблице 2 и Приложении

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Набор мебели медицинской (в вариантах исполнения) *	1
2	Руководство по эксплуатации	1

* количество необходимых изделий входящих в состав набора и их модификации (артикулы), определяются по согласованию с заказчиком при заказе.

8. Подготовка к работе медицинского изделия.

Работу проводить только после изучения указаний, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной таре в нормальных климатических условиях (от +10°C до +35°C) не менее 2 ч.

Полученное изделие распакуйте, произведите внешний осмотр. Проверьте целостность покрытий и комплектацию. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод в эксплуатацию без согласования с предприятием-изготовителем не допускается.

Необходимо ознакомиться с устройством изделия и порядком сборки (для сборно-разборных изделий).

Произвести дезинфекцию изделия средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

9. Инструкция по сборке

100118, 100121, 100122, 100123, 100124, 100125, 100126, 100127, 100128, 100221, 100222, 100223, 100224, 100191, 100192 поставляются в собранном виде. Внешний вид приведен в Приложении 3.

Для сборно-разборных:

1. Распаковать изделие и проверить целостность покрытия.
2. Проверить комплектность крепежа (Приложение 2)
3. Осуществить сборку согласно руководству (Приложение 3).

4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

10. Техническое обслуживание медицинского изделия.

Изделия имеют простую, надежную конструкцию и не требуют специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости проверка и регулировка резьбовых соединений, петель и покрытий.

В случае ослабления резьбовых соединений и петель, необходимо их затянуть. Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять надежность крепления колес. При необходимости производить затяжку крепежа.

Не рекомендуется длительное использование изделия вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, а также под воздействием прямых солнечных лучей.

В течение всего срока пользования изделием обязательно производите периодическую дезинфекцию, сроки очередной дезинфекции согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

11. Маркировка медицинского изделия.

Маркировка изделий содержит:

- наименование, юридический адрес предприятия-изготовителя;
- адрес места производства;
- товарный знак (логотип) предприятия-изготовителя (при наличии);
- общее наименование изделия;
- наименование элемента набора;
- артикул;
- серийный номер;
- дата производства;
- гарантийный срок;
- срок службы;
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения;
- обозначение настоящих технических условий;
- символ «Предел температуры»;
- символ «Диапазон влажности».

12. Упаковка медицинского изделия.

Упаковка изделий обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Изделия упакованы в гофрокартон по ГОСТ Р 52901. Дополнительно допускается упаковка изделий в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

Эксплуатационная документация упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена вместе с изделием.

Съемная фурнитура упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена вместе с изделием.

Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании заперты на замок или при отсутствии замков, закреплены средствами, исключающими повреждение мебели.

13. Транспортирование и хранение медицинского изделия.

Набор транспортируется железнодорожными, водным, автомобильным и воздушным транспортом. Вид транспортного средства - крытый в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования - 5 ОЖ4 по ГОСТ 15150: при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Условия хранения Набора на складах в упаковке предприятия-изготовителя - 1Л по ГОСТ 15150: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 80%. Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключая воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред.

14. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие Набора требованиям ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022 при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и выполнения требований Руководства по эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным покупателем.

Срок службы 8 лет с момента ввода в эксплуатацию. За предельное состояние принимается такое состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация не допустима по условиям безопасности или нецелесообразна по технико-экономическим или функциональным показателям.

15. Порядок осуществления утилизации медицинского изделия.

Специальных требований по утилизации оборудования не предъявляется.

Изделия, не поступившие в эксплуатацию, по истечении срока хранения подлежат вторичной переработке, либо подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованиями санитарных правил Российской Федерации. Изделия после эксплуатации подлежат утилизации (уничтожению), согласно требованиям СанПиН 2.1.3684, как отходы класса А, а также в соответствии с инструкциями действующими в лечебном-профилактическом учреждении.

16. Сведения о производителе медицинского изделия.

ИП Костров Александр Анатольевич

Юридический адрес: 427105, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, с. Люкшудья, ул. Лесная, д. 4

Адрес места производства: 426006, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, 135
Тел.: 8-800-700-01-89; E-mail: infoRY@fin18.ru.

17. Изделия соответствуют требованиям национальных стандартов:

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность»;

ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2 Требования к обращению с животными»

ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5 Исследование на цитотоксичность: методы in vitro»;

ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

ГОСТ ISO 10993-12-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12 Приготовление проб и контрольные образцы».

ГОСТ ISO 10993-23-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 23. Исследования раздражающего действия».

Габаритные размеры, масса изделий и конструктивные особенности

1. Кровать стационарная с подголовником, в вариантах исполнения:

Наименование	Арти-кул	Габаритные раз-меры, мм, ±5 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не бо-лее	Конструктивные осо-бенности
Кровать стационарная с подголовником, П-образ-ный профиль	100108	1950х800х740	23	С подголовником, без колес, ложе - П-образ-ный профиль
Кровать стационарная с подголовником, П-образ-ный профиль, большая	100109	2030х900х840	36	С подголовником, без колес, ложе - П-образ-ный профиль, Угол наклона подголовника: от 0° до 45°
Кровать стационарная с подголовником 1950х700х680 мм. высо-кая	100110	1950х700х680	21	Прямоугольные спинки, сварная сетка, ложе - П-образный профиль. Угол наклона подголовника: от 0° до 45°, ступенчатой рейкой
Кровать стационарная с под-головником 1950х700х840 мм	100111	1950х700х840	26	С подголовником, без колес, ложе - П-образ-ный профиль, Угол наклона подголовника: от 0° до 45°

Кровати могут иметь 4 колеса, диаметром не менее 100 мм, вращающиеся вокруг вертикальной оси, 2 колеса должны иметь индивидуальные тормоза.

2. Кровать металлическая передвижная с подголовником, П-образный профиль

Наименование	Артикул	Габаритные раз-меры, мм, ±5 мм (100ДхШхВ)	Масса, кг, не бо-лее	Конструктивные осо-бенности
Кровать металлическая пе-редвижная с подголовни-ком, П-образный профиль	100113	2060х 915х890	45	С подголовником, без колес, ложе - П-образ-ный профиль, Угол наклона подголовника: от 0° до 45°

Кровать может иметь 4 колеса, диаметром не менее 100 мм, вращающиеся вокруг вертикальной оси, 2 колеса должны иметь индивидуальные тормоза.

3. Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные раз-меры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не бо-лее	Конструктивные осо-бенности
Тумба медицинская под-катная с выдвижным ящиком и нижним отде-лением с дверкой	100118	440х450х850	20	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, на колесах

Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой	100119	430x450x660	20	С верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, на колесах
Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой	100120	430x450x660	20	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, на колесах
Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой	100121	430x430x660	20	С верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП
Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой	100122	430x430x660	20	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП
Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой № 2	100123	430x430x660	20	С верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП и МДФ
Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой	100124	430x430x660	20	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП и МДФ
Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой	100125	430x430x660	20	С одним отделением с дверкой и полкой, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП
Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой	100126	430x430x660	20	С одним отделением с дверкой и полкой, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП и МДФ
Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками	100127	430x430x660	25	С тремя выдвижными ящиками, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП
Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 2	100128	430x430x660	25	С тремя выдвижными ящиками, на колесах, каркасная с заполнением из ЛДСП и МДФ
Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой № 2	100129	430x450x660	20	С одним отделением с дверкой и полкой, на колесах
Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 3	100130	430x450x660	30	С тремя выдвижными ящиками, на колесах

4. Тумба медицинская под аппаратуру

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Тумба медицинская под аппаратуру	100139	700X600X850	35	Двустворчатая, с двумя полками

5. Стол медицинский подкатной, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты	100164	750x400x800-1270	14	с регулировкой высоты, на колесах, облегченный
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №2	100165	750x400x800-1270	15	с регулировкой высоты, на колесах
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №3	100166	750x400x800-1270	15	с регулировкой высоты, на колесах, со столешницей из полиэтилена
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №4	100167	750x400x800-1270	15	С регулировкой высоты, на колесах, со Столешницей из МДФ

6. Стол медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Стол медицинский 850x750x750 мм	100168	850x750x750	20	Четыре ножки, столешница из ЛДСП
Стол медицинский 1000x750x750 мм	100169	1000x750x750	25	Четыре ножки, столешница из ЛДСП
Стол медицинский 850x750x750 мм №2	100170	850x750x750	20	Четыре ножки, столешница из МДФ
Стол медицинский 1000x750x750 мм №2	100171	1000x750x750	25	Четыре ножки, столешница из МДФ

7. Стол медицинский для забора крови

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Стол медицинский для забора крови	100172	560x390x710	15	Регулируемые опоры

8. Стол медицинский инструментальный, в вариантах исполнения:

Наименование	Арти- кул	Габаритные размеры, мм, ± 4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особен- ности
Стол медицинский ин- струментальный с нишей и дверкой	100173	510x615x930	55	Комплектация: дверь и ниша, колеса поворотные, самоори- ентирующиеся (два колеса с индивидуальным тормозом)
Стол медицинский ин- струментальный с вы- движным ящиком и двер- кой	100174	510x615x930	55	Комплектация: с выдвижным ящиком и дверкой, колеса по- воротные, самоориентирую- щиеся (два колеса с индиви- дуальным тормозом)
Стол медицинский ин- струментальный с тремя выдвижными ящиками	100175	510x615x930	55	Комплектация: с тремя вы- движными ящиками, колеса поворотные, самоориентиру- ющиеся (два колеса с инди- видуальным тормозом)
Стол медицинский ин- струментальный с двумя нишами и дверками, арти- кул 100176	100176	950x615x930	75	Комплектация: с двумя ни- шами и двумя дверками, ко- леса поворотные, самоориен- тирующиеся (два колеса с ин- дивидуальным тормозом)
Стол медицинский ин- струментальный широкий с двумя выдвижными ящиками и нишей	100177	950x615x930	75	Комплектация: комплекта- ция: дверь и ниша, колеса по- воротные, самоориентирую- щиеся (два колеса с индиви- дуальным тормозом)
Стол медицинский ин- струментальный широкий с тремя выдвижными ящиками	100178	950x615x930	75	Комплектация: с тремя вы- движными ящиками, колеса поворотные, самоориентиру- ющиеся (два колеса с инди- видуальным тормозом)
Стол медицинский ин- струментальный с двумя выдвижными ящиками и дверками	100179	950x615x930	75	Комплектация: с двумя вы- движными ящиками и двумя дверками, колеса поворот- ные, самоориентирующиеся (два колеса с индивидуаль- ным тормозом)
Стол медицинский ин- струментальный с че- тырьмя выдвижными ящиками и дверкой	100180	950x615x930	75	Комплектация: с четырьмя выдвижными ящиками и дверкой, колеса поворотные, самоориентирующиеся (два колеса с индивидуальным тормозом)

9. Стол медицинский с мойкой, в вариантах исполнения:

Наименование	Арти-кул	Габаритные раз-меры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особен-ности
Стол медицинский с мойкой и тумбой, широкий, правый	100191	890х600х1200	55	Лабораторный с тумбой, с дверкой и мойкой слева
Стол медицинский с мойкой и тумбой, широкий, левый	100192	890х600х1200	55	Лабораторный с тумбой, с дверкой и мойкой справа

10. Шкаф медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные раз-меры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особен-ности
Шкаф медицинский с двумя дверьми и пятью полками, с регулируе-мыми опорами	100219	860х460х1950	75	Односекционный, дву-створчатый, с пятью пол-ками, на опорах
Шкаф медицинский дву-створчатый, с двумя вер-тикальными отделениями, с регулируемыми опо-рами	100220	860х460х1950	80	Двустворчатый, с двумя вертикальными отделени-ями, с полкой и перекла-диной в первом отделе-нии, с пятью полками во втором отделении, на опо-рах
Шкаф медицинский одно-створчатый с открытой секцией	100233	450х460х1950	35	Двухсекционный, одно-створчатый, с двумя от-крытыми полками в верх-ней секции, одной полкой в нижней секции, на опо-рах
Шкаф медицинский одно-створчатый с двумя двер-цами	100234	450х460х1950	35	Двухсекционный, одно-створчатый, с двумя пол-ками в верхней секции, с одной полкой в нижней секции, на опорах
Шкаф медицинский двух-секционный, двустворча-тый с четырьмя дверцами	100235	860х460х1950	74	Двухсекционный, двух-створчатый, с двумя пол-ками в верхней секции, одной полкой в нижней секции, на опорах

11. Шкаф медицинский навесной, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные раз-меры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особен-ности
--------------	---------	--	---------------------	-----------------------------

Шкаф медицинский навесной двухстворчатый	100221	860x380x450	20	Навесной, двухстворчатый, с полкой, каркасный с заполнением ЛДСП
Шкаф медицинский навесной двухстворчатый остекленный	100222	860x380x450	20	Навесной, двухстворчатый остекленный, с полкой, каркасный с заполнением ЛДСП
Шкаф медицинский навесной двухстворчатый с полкой	100223	860x380x450	20	Навесной, двухстворчатый, с полкой
Шкаф медицинский навесной двухстворчатый остекленный с полкой	100224	860x380x450	20	Навесной, двухстворчатый остекленный, с полкой

12. Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией	100236	570x320x1655	32	Двухсекционный, одностворчатый, со стеклянными полками и стеклянной дверкой в верхней секции, металлическими полками и дверкой в нижней секции
Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией №2	100237	570x320x1655	38	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из стекла Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный	100238	600x400x1750	38	Одна открытая секция, вторая закрытая. Количество полок 4 Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из стекла. Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2	100239	600x400x1750	45	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из стекла. Нижняя секция дверь и две полки из металла

Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками	100240	570x320x1655	27	двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками в секциях
Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками №2	100241	570x320x1655	36	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из металла Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный	100242	600x400x1750	31	Две закрытые секции. Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из металла. Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2	100243	600x400x1750	41	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из металла. Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией	100244	700x320x1655	38	Двухсекционный, двустворчатый, со стеклянными полками и стеклянными дверками в верхней секции, металлическими полками и дверками в нижней секции
Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией №2	100245	700x320x1655	45	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный Количество створок двустворчатый. Верхняя секция две дверки и две полки из стекла Нижняя секция две дверки и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный	100246	800x400x1750	45	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двустворчатый
Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2	100247	800x400x1750	56	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двустворчатый

Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками	100248	700x320x1655	41	двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками в секциях
Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками №2	100249	700x320x1655	43	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двухстворчатый
Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный	100250	800x400x1750	38	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двухстворчатый
Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2	100251	800x400x1750	54	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двухстворчатый

13. Тележка для перевозки больных, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Тележка для перевозки больных с подголовником	100262	Размеры каркаса: 1050x625x780 Размеры съемной панели: 2050x595	28	Со съемной панелью, с подголовником в комплекте с матрасом. Угол наклона подголовника: 0-45, ступенчатая, механизм Растомат.
Тележка для перевозки больных со ступенчатым подголовником	100264	Размеры каркаса: 1050x625x780 Размеры съемной панели: 2050x595	28	Со съемной панелью, с подголовником в комплекте с матрасом. Угол наклона подголовника: 0-45, ступенчатая, механизм Растомат.

14. Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Кушетка медицинская смотровая бесступенчатая	100265	1950x650x520	30	Угол наклона подголовника: от 0° до 45°, бесступенчатый
Кушетка медицинская смотровая со ступенчатым подголовником	100266	1970x665x550	30	Угол наклона подголовника: от 0° до 45°, механизмами Растомат

15. Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
--------------	---------	---------------------------------------	---------------------	----------------------------

Ширма медицинская стационарная, 1 секция	100284	790x400x1650	4 – одной секции	Без колес, 1 секция
Ширма медицинская стационарная, 2 секции	100285	790x400x1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес, 2 секции
Ширма медицинская стационарная, 3 секции	100286	790x400x1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес, 3 секции
Ширма медицинская стационарная, 1 секция, на плоских ножках	100287	800x400x1720	4 – одной секции	Без колес, 1 секция.
Ширма медицинская стационарная, 2 секции, на плоских ножках	100288	800x400x1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес, 2 секции.
Ширма медицинская стационарная, 3 секции, на плоских ножках	100289	800x400x1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес, 3 секции.

16. Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Ширма медицинская передвижная, 1 секция	100290	790x400x1650	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 1 секция
Ширма медицинская передвижная, 2 секции	100291	790x400x1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 2 секции
Ширма медицинская передвижная, 3 секции	100292	790x400x1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 3 секции
Ширма медицинская передвижная, 1 секция, на плоских ножках	100293	800x400x1720	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 1 секция.
Ширма медицинская передвижная, 2 секции, на плоских ножках	100294	800x400x1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 2 секции.
Ширма медицинская передвижная, 3 секции, на плоских ножках	100295	800x400x1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 3 секции.

17. Штатив медицинский передвижной регулировкой высоты

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Штатив медицинский передвижной с регулировкой высоты	100298	640x1180-2010	3	5 опор, возможна установка колес (диаметр не менее 50 мм, вращаю-

				щихся вокруг вертикаль- ной оси) на каждую опору
--	--	--	--	--

Приложение 2

Комплектность крепежа изделий

1. Кровать стационарная с подголовником, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100108	100109	100110	100111
Ложе с подго- ловником	1	1	1	1
Спинка	2	2	2	2
Болт М6х35	8	8	8	8
Болт М6х16	-	-	-	-
Болт мебель- ный М8х70	-	8	-	8
Гайка М6	8	8	8	8
Гайка М8	-	4	-	4
Шайба 6	8	8	8	8
Шайба 8	-	4	-	4
Уголок левый	-	2	-	2
Уголок правый	-	2	-	2

2. Кровать металлическая передвижная с подголовником, П-образный профиль:

Наименование	Количество, шт.
	100113
Подматрачная рама	1
Ножка	2
Колесо с тормозом	2
Колесо без тормоза	2
Спинка	2
Отбойник пвх	4
Болт мебельный м8х70	8
Шайба 8 пружинная	8
Гайка М8	8
Винт М10х30	4
Шайба10 пружинная	4
Болт М10х45	4
Шайба10 увеличенная	4

3. Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100119	100120	100129	100130
Стенка боковая	2	2	2	2
Дно, верх	2	2	2	2
Стенка задняя	1	1	1	1
Полка	1	1	1	-
Дверь	1	1	1	-
Ящик	-	-	-	3
Стяжка-ТЕ 15	8	12	8	20
Шток	8	12	8	20
Шкант 8х30	12	16	8	32
Петля	2	2	2	-
Ручка-скоба	1	2	1	3
Шуруп 2А3-13	24	36	26	42
Заглушка эксцентрик	8	12	8	20
Колесо	4	4	4	4
Компл.направляющих	-	1	-	3
Полкодержатель	-	-	4	-
Конфирмат	-	-	-	-
Ключ шестигранный	-	-	-	-
Заглушка конфирмат	-	-	-	-

4. Тумба медицинская под аппаратуру:

Наименование	Количество, шт.
	100139
Боковая стенка	2
Задняя стенка	1
Порог	1
Дно, верх	2
Полка	2
Дверь	2
Стяжка- ТЕ 15	4
Шток	4
Конфирмат	4
Ключ шестигранный	1
Шкант 8х30	12
Петля	4
Ручка-скоба	2
Шуруп 2А3-13	30
Подпятник	4
Полкодержатель	8
Заглушка эксцентрик	4
Заглушка конфирмат	4
Профиль стыковочный	1

5. Стол медицинский подкатной, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100164	100165	100166	100167

Основание столика	1	1	1	1
Вертикальная направляющая	1	1	1	1
Стойка столешницы	1	1	1	1
Столешница	1	1	1	1
Винт М6 х 45	5	5	5	5
Гайка М6	5	5	5	5
Шайба 6	5	5	5	5
Шуруп 5 X 15	8	8	-	8
Винт М10х25	-	4	4	4
Рукоятка	1	1	1	1
Шайба пружинная 10	-	4	4	4
Колесо	4	4	4	4

6. Стол медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100168	100169	100170	100171
Каркас- столешница	1	1	1	1
Ножка	4	4	4	4
Перемычка	1	1	1	1
Гайка М10	4	4	4	4
Шайба пружинная 10	4	4	4	4

7. Стол медицинский для забора крови

Наименование	Количество, шт.
	100172
Столик	1
Каркас	1
Опора	2
Винт М5 X 35	8
Шайба 5	8
Гайка М5	8
Ножка	4

8. Стол медицинский инструментальный, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.							
	100173	100174	100175	100176	100177	100178	100179	100180
Основание	1	1	1	1	1	1	1	1
Заклепка М6 резьбовая	38	52	79	54	65	79	80	107
Винт 6х10 мм	42	56	83	58	69	83	86	116
Футорка М6	4	4	4	4	4	4	6	6
Боковина	2	2	2	3	2	2	3	3
Замок мебельный	1	1	1	2	-	1	2	1
Ручка врезная	1	2	3	2	2	3	4	5
Опора колесная 100 мм	4	4	4	4	4	4	4	4
Карточная петля	2	2	-	4	-	-	4	2
Столешница	1	1	1	1	1	1	1	1
Направляющая роликовая	-	-	6	-	4	6	-	8

9. Шкаф медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.				
	100219	100220	100233	100234	100235
Боковая стенка	2	2	2	2	2
Задняя стенка	1	1	1	1	1
Дно, верх	2	2	2	2	2
Полка	5	6	4	2	2
Полка стеклянная	-	-	-	2	2
Дверь	2	2	1	2	4
Штанга	-	1	-	-	-
Перегородка (стойка)	-	1	-	-	-
Конфирмат	16	20	12	12	12
Ключ шестигранный	1	1	1	1	1
Шкант 8х30	16	20	12	12	12
Петля	6	6	2	2	4
Петля с доводчиком	-	-	-	2	2
Ручка-скоба	2	2	-	-	2
Ручка-скоба большая	-	-	1	1	2
Шуруп 2А3-13	50	64	42	42	50
Евровинт V6310	24	24	8	12	24
Винт М5х12	-	-	-	4	8
Регулируемая опора	4	4	4	4	4
Заглушка конфирмат	16	20	12	12	12
Полкодержатель	8	16	12	4	12
Полкодержатель под ст	-	-	-	8	8
Профиль стыковочный	1	-	-	-	1
Штангодержатель	-	2	-	-	-

10. Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения:

11. Наименование	Количество, шт.			
	100236	100237	100238	100239
Стенка задняя (лев., прав.)	1	1	2	2
Полка	2	2	2	2
Дверь нижняя	1	1	1	1
Дверь стеклянная	1 (510х745)	1 (510х745)	1 (540х795)	1 (540х795)
Короб	3	3	3	3
Стенка боковая (лев., прав.)	2	2	2	2
Регулируемая опора	4	4	4	4
Полка стеклянная	2 (270х565)	2 (270х565)	2 (350х595)	2 (350х595)
Саморез 4,2х13	25	25	30	30
Саморез 3х17	4	4	4	4
Защелка магнитная	2	2	2	2
Замок мебельный	1	1	1	1
Втулка ПВХ	4	4	4	4
Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.)	1*	1*	1*	1*
Петля для стекла (2 шт.) + ручка	1	1	1	1
Полкодержатель	16	16	16	16
Гайка М5+Шайба 5	11	11	12	12
Винт М5х12	16	16	27	27

* комплектуется по согласованию с заказчиком

Наименование	Количество, шт.			
	100240	100241	100242	100243
Стенка задняя	1	1	1	1
Полка	4	4	4	4
Дверь	2	2	2	2
Короб	3	3	3	3
Стенка боковая (лев., прав.)	2	2	2	2
Регулируемая опора	4	4	4	4
Винт М5х12	26	26	26	26
Шайба 5	26	26	26	26
Саморез 3х17	4	4	4	4
Защелка магнитная	2	2	2	2
Замок мебельный	2	2	2	2
Втулка ПВХ / Ось мебельная	4/4	4/4	4/4	4/4
Полкодержатель	16	16	16	16
Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 — 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.)	1*	1*	1*	1*

* комплектуется по согласованию с заказчиком

Наименование	Количество, шт.							
	100244	100245	100246	100247	100248	100249	100250	100251
Стенка задняя (лев., прав.)	2	2	2	2	2	2	2	2
Полка	2	2	2	2	2	2	2	2
Дверь	2	2	2	2	2	2	2	2
Короб	3	3	3	3	3	3	3	3
Стенка боковая (лев., прав.)	2	2	2	2	2	2	2	2
Дверь стеклянная	2 (318х747)	2 (318х747)	2 (367х792)	2 (367х792)	2 (318х747)	2 (318х747)	2 (367х792)	2 (367х792)
Полка стеклянная	2 (272х695)	2 (272х695)	2 (352х795)	2 (352х795)	2 (272х695)	2 (272х695)	2 (352х795)	2 (352х795)
Регулируемая опора	4	4	4	4	4	4	4	4
Винт М5х12	29	29	26	26	29	29	26	26
Гайка М5	25	25	25	25	25	25	25	25
Саморез 4,2х13	20	20	23	23	20	20	23	23
Саморез 3х17	8	8	8	8	8	8	8	8
Защелка магнитная	4	4	4	4	4	4	4	4
Замок мебельный	1	1	1	1	1	1	1	1
Втулка ПВХ	8	8	8	8	8	8	8	8
Ручка для стекла	2	2	2	2	2	2	2	2
Петля для стекла	4	4	4	4	4	4	4	4
Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 — 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.)	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*
Полкодержатель	16	16	16	16	16	16	16	16

* комплектуется по согласованию с заказчиком

12. Тележка для перевозки больных, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.	
	100262	100264
Боковина	2	2
Стяжка	3	3
Съемная панель	1	1
Болт М10х45	6	6
Шайба 10 пружинная	10	10
Винт М10х25	4	4
Колесо с тормозом, диаметром 125 мм	2	2
Колесо без тормоза, диаметром 125 мм	2	2
Матрац	1	1

13. Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.
	100265
Ложе	1
Стойка левая	1
Стойка правая	1
Стяжка	1
Болт М10х45	6
Шайба	6
Заглушка	4

Наименование	Количество, шт.
	100266
Ложе с каркасом и подголовником	1
Ножка	4
Гайка М10	8
Шайба пружинная 10	4
Заглушка	6

14. Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.					
	100284	100285	100286	100287	100288	100289
Экран	1	1	1	1	1	1
Стяжка	2	2	2	2	2	2
Стойка одинарная	1	1	1	1	1	1
Стойка двойная	1	1	1	1	1	1
Колодка ПВХ, соединительная	4	4	4	4	4	4
Болт М6х30	4	4	4	4	4	4
Шайба 6 пружинная	4	4	4	4	4	4
Болт М4х20	2	2	2	2	2	2
Шайба 4	2	2	2	2	2	2
Гайка М4	2	2	2	2	2	2
Заглушка МСК302/4	5	5	5	-	-	-

15. Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.
--------------	-----------------

	100290	100291	100292	100293	100294	100295
Экран	1	1	1	1	1	1
Стяжка	2	2	2	2	2	2
Стойка одинарная	1	1	1	1	1	1
Стойка двойная	1	1	1	1	1	1
Колесо	3	3	3	3	3	3
Колодка, соединительная	4	4	4	4	4	4
Болт М6х30	4	4	4	4	4	4
Шайба 6 пружинная	4	4	4	4	4	4
Болт М4х20	2	2	2	2	2	2
Шайба 4	2	2	2	2	2	2
Гайка М4	2	2	2	2	2	2
Заглушка МСК302/4	2	2	2	-	-	-


16. Штатив медицинский передвижной регулировкой высоты

Наименование	Количество, шт.
	100298
Основание	1
Стойка	1
Держатель	1
Заглушка	-
Шуруп 10х40 ГОСТ 11474-75	-
Колеса диаметром 50 мм без тормоза	3
Колеса диаметром 50 мм с тормозом	2
Болт 10х30 ГОСТ 7805-72	1
Винт 10х30 ГОСТ 11738-70	5
Шайба 10 ГОСТ 6402-72	6

Инструкция по сборке «Кровать стационарная с подголовником, в вариантах исполнения»


*Кровать стационарная с подголовником, П-образный профиль, артикул 100108;
Кровать стационарная с подголовником 1950x700x680 мм, высокая, артикул 100110*

Собрать при помощи болтов, гаек и шайб ложе со спинками.

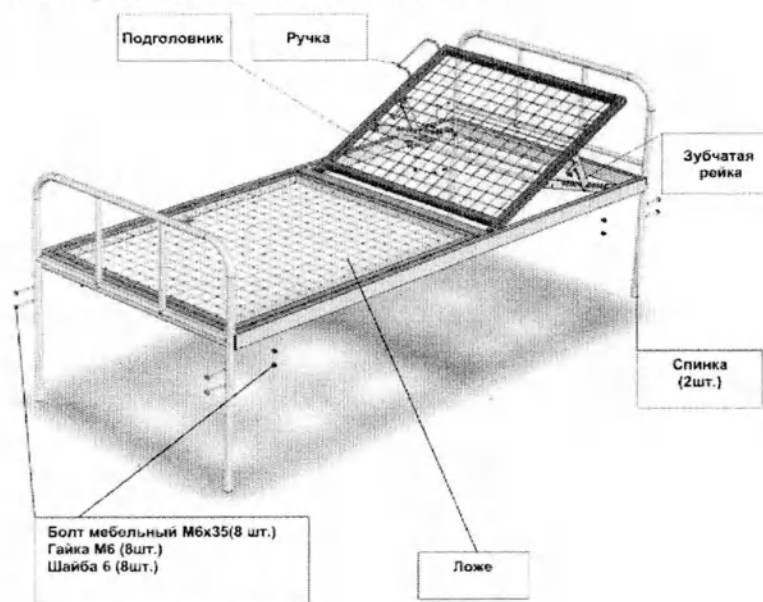

*Кровать стационарная с подголовником, П-образный профиль, большая, артикул 100109;
Кровать стационарная с подголовником 1950x700x840 мм, артикул 100111*


1. При помощи болтов М6х35, гаек М6 и шайб 6 прикрепить уголки сначала к спинке кровати, а затем к раме.
2. Прикрепить ложе к спинкам болтами М8х70, гаек М8 и шайб 8.
3. Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления всех узлов кровати, установите кровать на место.
4. Установите необходимый угол наклона подголовника.
5. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

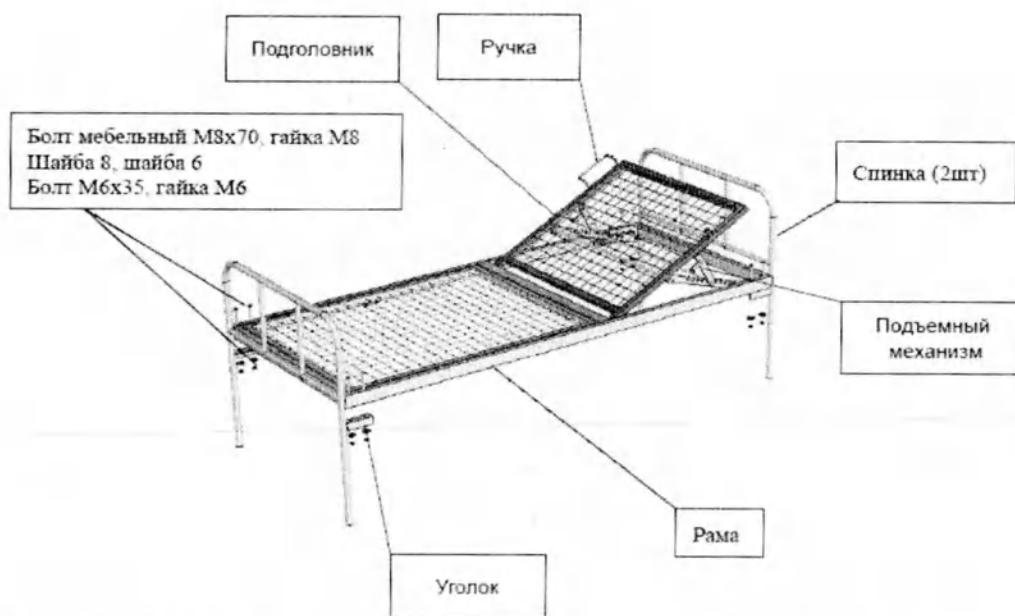

Инструкция по сборке «Кровать металлическая передвижная с подголовником, П-образный профиль»

Кровать металлическая передвижная с подголовником, П-образный профиль, артикул 100113


1. Прикрепить колеса к ножкам при помощи винтов М10х30 и шайб 10 пружинных. Для более надежной фиксации резьбы рекомендуем винты посадить на краску.
2. Прикрепить ножки к раме при помощи болтов М8х70, гаек М8 и шайб 8 пружинных.
3. Вставить обе спинки в каркас.
4. Прикрепить отбойники при помощи болтов М10х45 и шайб 10 увеличенных.

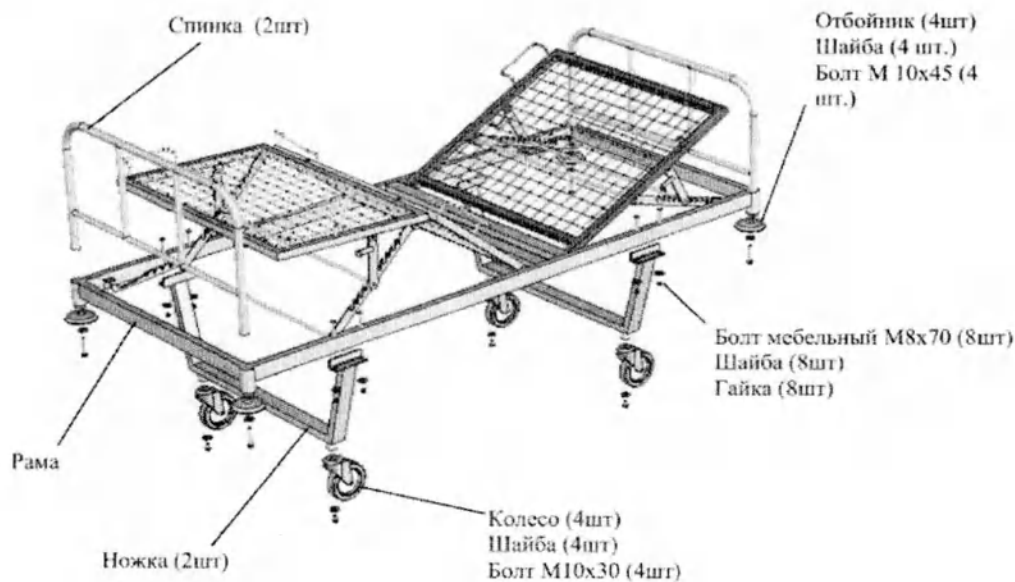



Инструкция по сборке «Тумба медицинская подкатная, в вариантах исполнения»:

Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100119

1. Скрепить при помощи стяжек-эксцентров и шкантов дно (1) с боковыми стенками (2).
2. Между боковинами (2) при помощи шкантов установить полку (4).

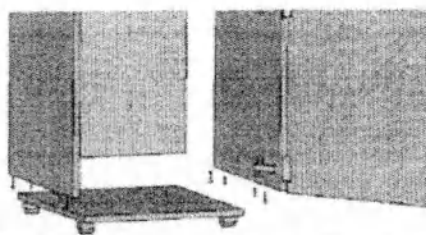



3. Вставить стенку заднюю (3) в пазы боковин (2).
4. При помощи стяжек-эксцентров и шкантов сверху установить крышку (5).

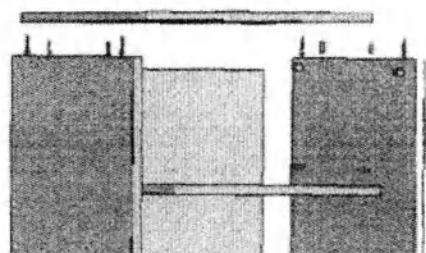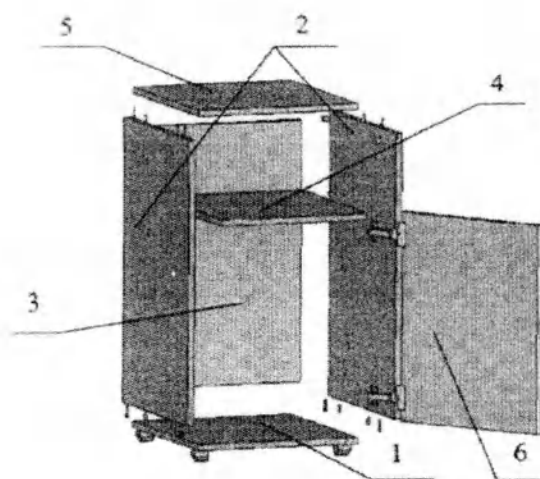


5. С помощью петель навесить дверь (6), отрегулировать ее положение, используя для этого предусмотренные винты на петлях.
6. Используя винты установить на дверь ручку, а снизу к дну (1) установить колеса.

Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100120

1. Скрепить дно (3) при помощи стяжек-эксцентриков и шкантов с боковыми стенками (2).
2. Установить заднюю стенку (4) с дном (3) и боковыми стенками (2), заведя заднюю стенку в пазы.

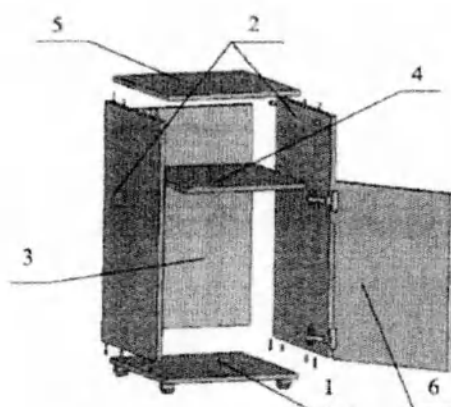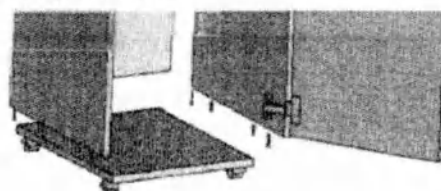


3. При помощи стяжек-эксцентриков и шкантов сверху установить крышку (5).
4. К боковинам (2) установить направляющие, используя для этого предусмотренные конструкцией шурупы.

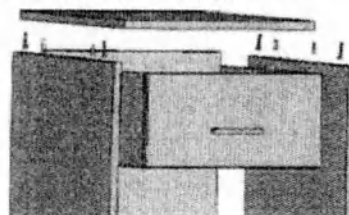


5. С помощью петель навесить дверь (6), отрегулировать ее положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.
6. Собрать ящик (1) при помощи стяжек-эксцентриков и шкантов. Дно ящика завести в паз на боковинах и лицевой панели. Прикрепить направляющие при помощи шурупов.
7. Установить ящик (1).
8. Используя винты установить на дверь (6) и ящик (1) ручки, а снизу к дну (1) закрепить колеса.

Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой № 2, артикул 100129

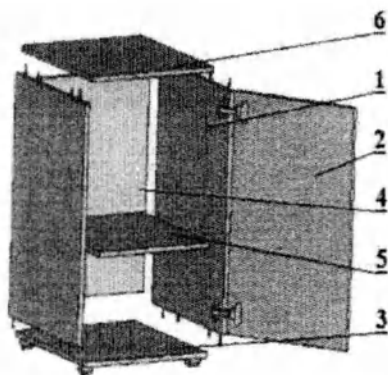


1. Скрепить дно (3) при помощи стяжек-эксцентров и шкантов с боковыми стенками (1).
2. Прикрепить заднюю стенку (4) с дном (3) и боковыми стенками (1), заведя заднюю стенку (4) в пазы.

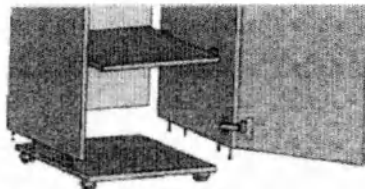


3. При помощи стяжек-эксцентров и шкантов сверху установить крышку (6).
4. Между боковинами (1) при помощи полкодержателей установить полку (5).
5. С помощью петель навесить дверь (2), отрегулировать ее положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.
6. Используя винты на дверь (2) прикрепить ручку, а снизу к дну (3) установить колеса.


Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 3, артикул 100130

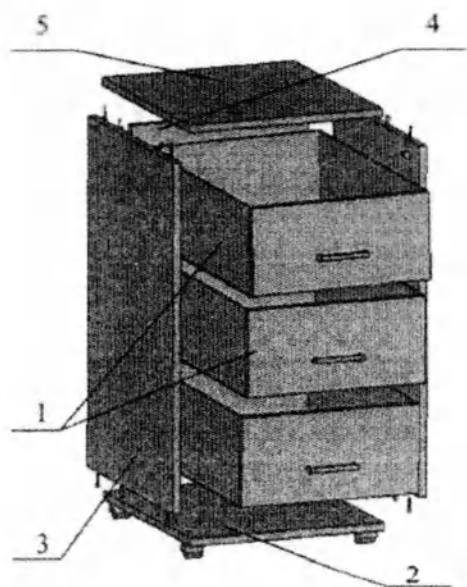

1. Скрепить при помощи стяжек-эксцентров и шкантов дно (2) с боковыми стенками (3).
2. Прикрепить заднюю стенку (4) с дном (2) и боковыми стенками (3), заведя заднюю стенку (4) в пазы.

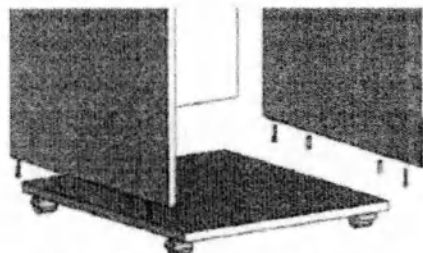


3. При помощи стяжек-эксцентров и шкантов сверху установить крышку (5).

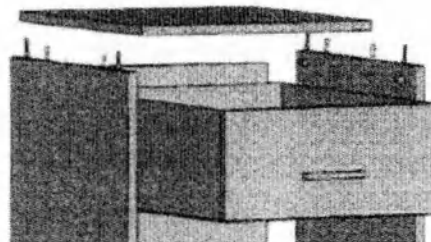


4. К боковинам (3) установить направляющие, используя для этого предусмотренные конструкцией шурупы.
5. Собрать ящики (1) при помощи стяжек-эксцентров и шкантов. Дно ящика завести в паз на боковинах и лицевой панели. Прикрепить направляющие при помощи шурупов.
5. Установить ящики (1).
6. Используя винты на ящики (1) прикрепить ручки, а снизу к дну (2) установить колеса.

Инструкция по сборке «Тумба медицинская под аппаратуру»


Тумба медицинская под аппаратуру, артикул 100139

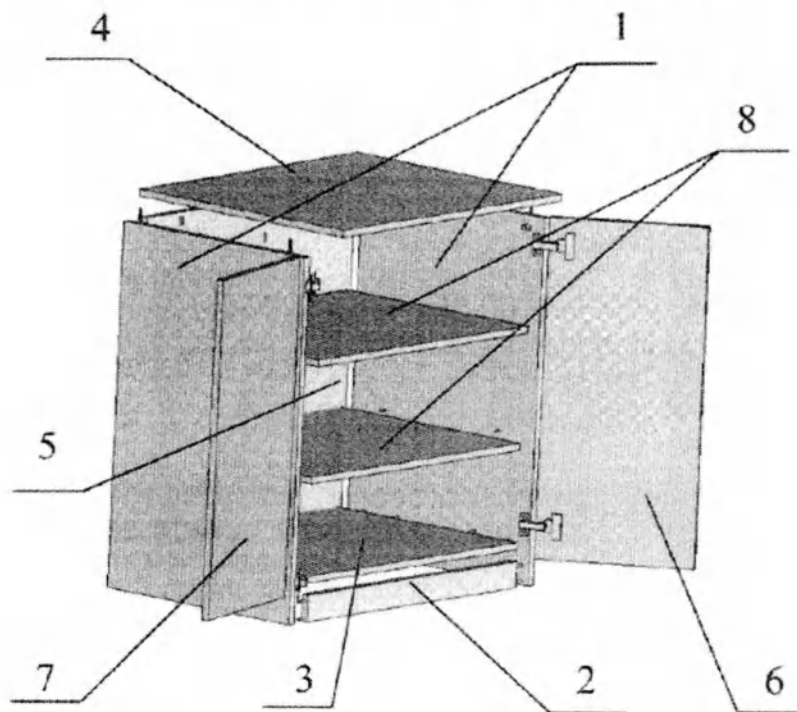

1. Скрепить при помощи стяжек-эксцентриков и шкантов крышку (4), при помощи конфирматов и шкантов дно (3) и шкантами - порог (2) с боковыми стенками (1).
2. С помощью шурупов и стыковочного профиля скрепить стенки задние (5) с боковинами (1).

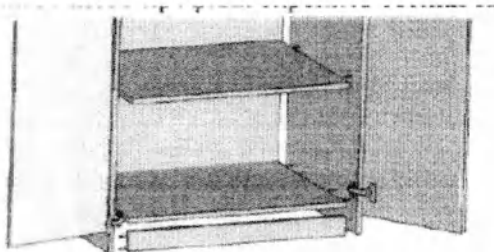


3. Между боковинами (1) при помощи полкодержателей установить полки (8).
4. С помощью петель навесить двери (6, 7), отрегулировать их взаимное положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

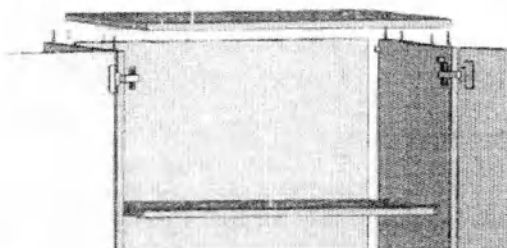

5. Используя винты на двери (6, 7) прикрепить ручки, а под боковины (1) с помощью шурупов установить подпятники.

Инструкция по сборке «Стол медицинский подкатной, в вариантах исполнения»

*Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты, артикул 100164;
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №2, артикул 100165;
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №3, артикул 100166;
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №4, артикул 100167;*

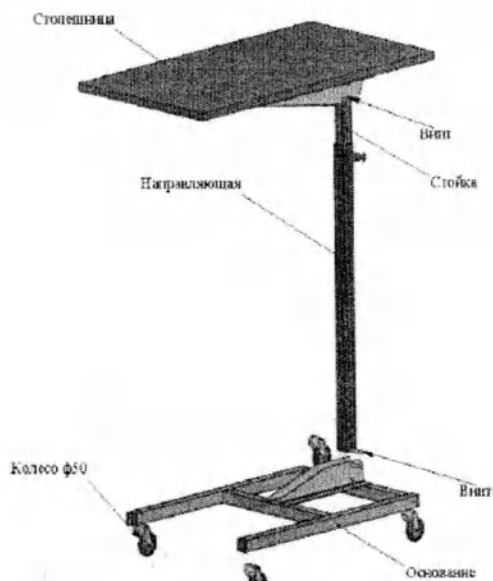

1. Прикрепить вертикальную направляющую к основанию стола при помощи винтов М6, гаек и шайб.
2. Прикрепить столешницу к стойке при помощи винтов М6, гаек и шайб.
3. В направляющую вставить стойку столешницы и зафиксировать на необходимой высоте при помощи рукоятки.
4. Прикрутить колеса к основанию при помощи винтов М10 и шайб пружинных.


Инструкция по сборке «Стол медицинский, в вариантах исполнения»:

Стол медицинский 850x750x750 мм, артикул 100168

Стол медицинский 1000x750x750 мм, артикул 100169

Стол медицинский 850x750x750 мм №2, артикул 100170


Стол медицинский 1000x750x750 мм №2, артикул 100171

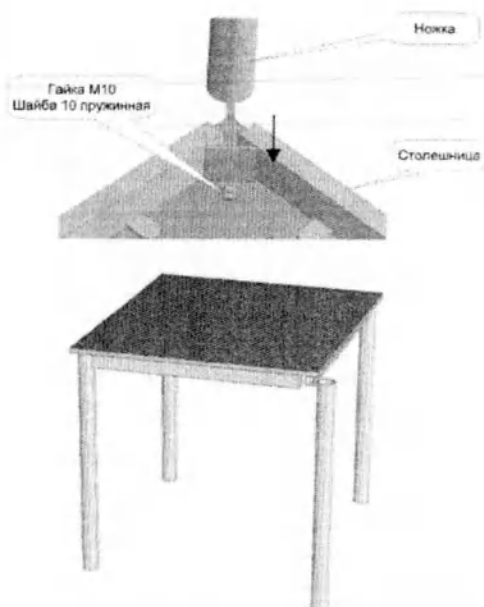


1. Распаковать комплектующие.
2. Установить ножки. Прикрутить их гайками М10 с шайбами 10 пружинными.

Инструкция по сборке «Стол медицинский для забора крови»


Стол медицинский для забора крови, артикул 100172

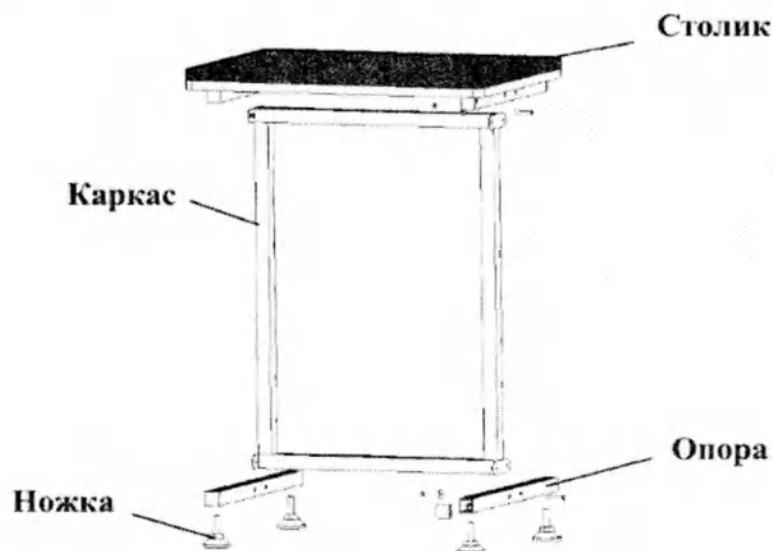

1. Соединить столик (1) с каркасом (2) при помощи винта (4), гайки (6) и шайбы (5).

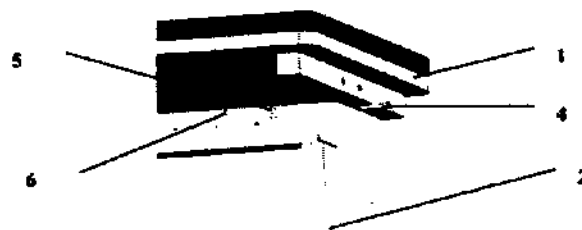

2. К каркасу (2) присоединить опору (3) аналогично.

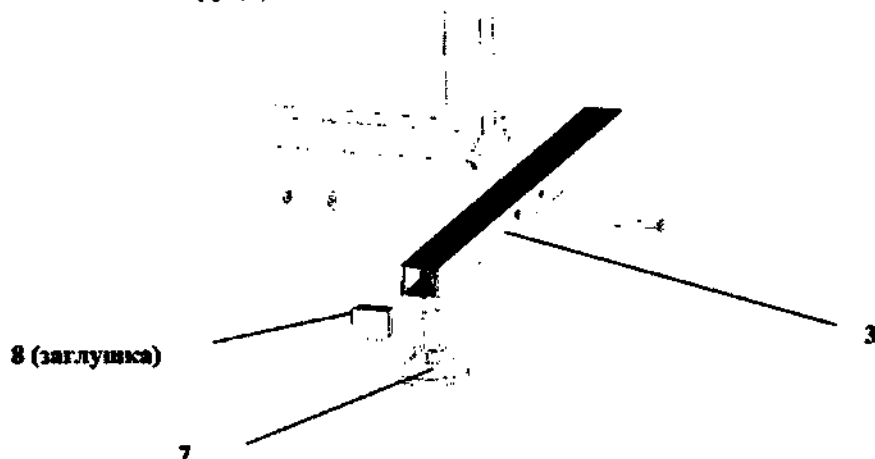


3. Прикрутить ножки (7).

4 Установить заглушки (8).


Инструкция по сборке «Стол медицинский инструментальный, в вариантах исполнения»:

Стол медицинский инструментальный с нишей и дверкой, артикул 100173

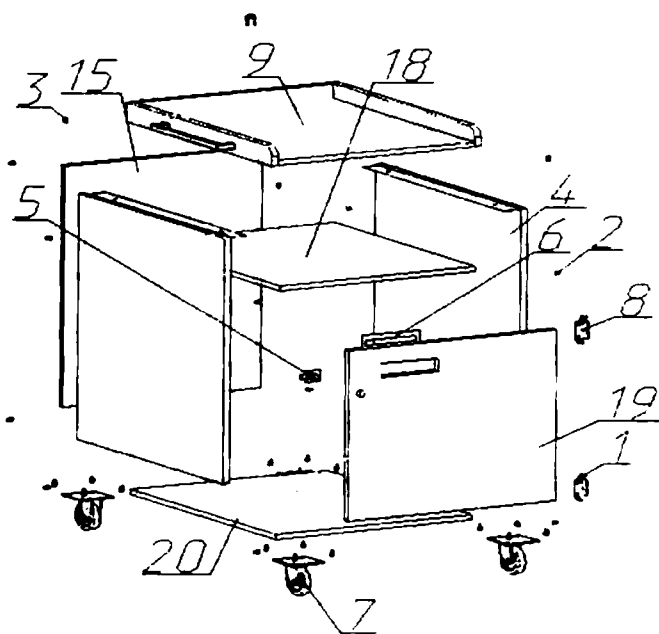


1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (20) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Установить замок (5) в нижний фасад (19).
3. Установить ручки (6) в фасады (19).
4. Прикрепить петли (8) к фасадам (19) при помощи винтов (2).
5. Прикрепить боковины (4) ко дну (20) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Прикрепить полку (18) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить столешницу (9) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (1).
9. Навесить фасад (19) при помощи петель (8), прикрутив части петель к правой боковине (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).

Стол медицинский инструментальный с выдвижным ящиком и дверкой, артикул 100174

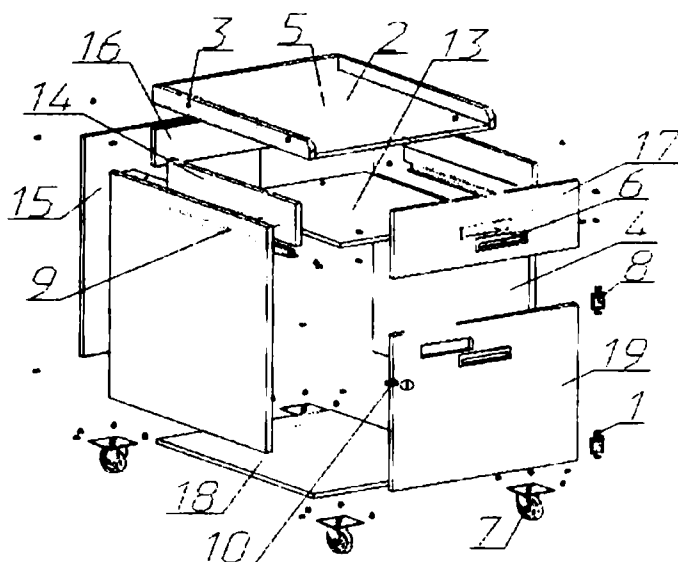


1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Установить замок (10) в нижний фасад (19).
3. Установить ручки (6) в фасады (17, 19).
4. Прикрепить петли (8) к фасадам (19) при помощи винтов (2).
5. Прикрепить боковины (4) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Собрать детали ящиков (13, 14, 16), между собой при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить фасад (17) к корпусу ящика при помощи винтов (2) через заклепки (1).
9. Прикрепить столешницу (5) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (3).
10. Установить выдвижной ящик при помощи направляющих (9), прикрепив части направляющих к боковинам (4) и боковинам ящиков (14) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
11. Навесить фасад (19) при помощи петель (8), прикрутив части петель к правой боковине (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).

Стол медицинский инструментальный с тремя выдвижными ящиками, артикул 100175

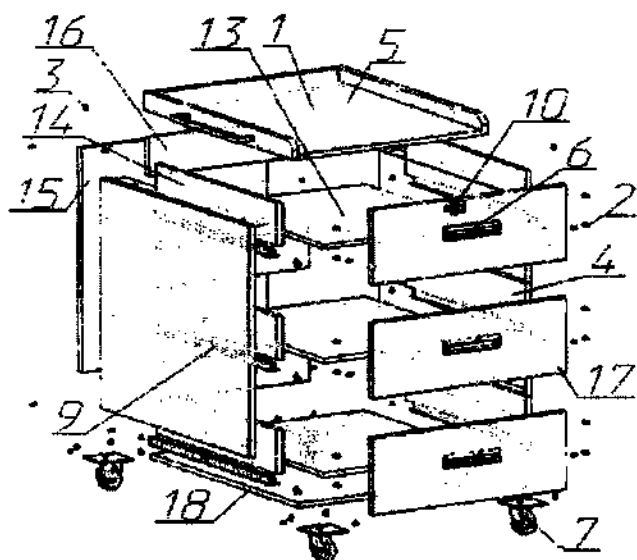


1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Установить замок (10) в нижний фасад (17).
3. Установить ручки (6) в фасады (17).
4. Прикрепить боковины (4) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
5. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Собрать детали ящиков (13, 14, 16), между собой при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Прикрепить фасад (17) к корпусу ящика при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить столешницу (5) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (3).
9. Установить выдвижной ящик при помощи направляющих (9), прикрепив части направляющих к боковинам (4) и боковинам ящиков (14) при помощи винтов (2) через заклепки (1).

Стол медицинский инструментальный с двумя нишами и дверками, артикул 100176

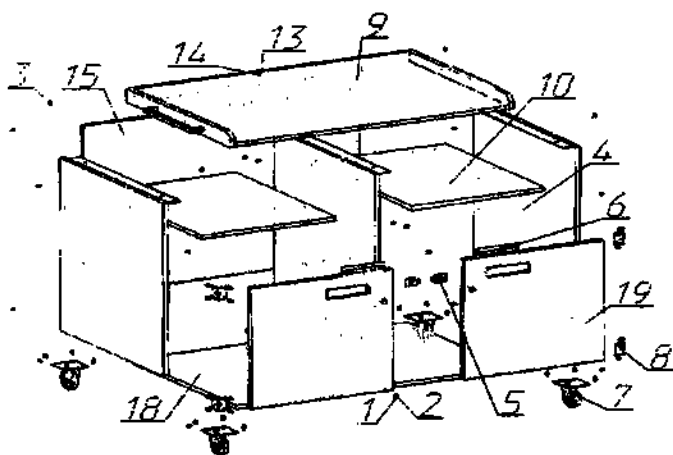


1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Установить замок (5) в нижний фасад (19).
3. Установить ручки (6) в фасады (19).
4. Прикрепить петли (8) к фасадам (19) при помощи винтов (2).
5. Прикрепить боковины (4) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Прикрепить полку (10) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить столешницу (9) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (3).
9. Навесить фасад (19) при помощи петель (8), прикрутив части петель к правой боковине (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).

Стол медицинский инструментальный широкий с двумя выдвижными ящиками и нишей, артикул 100177

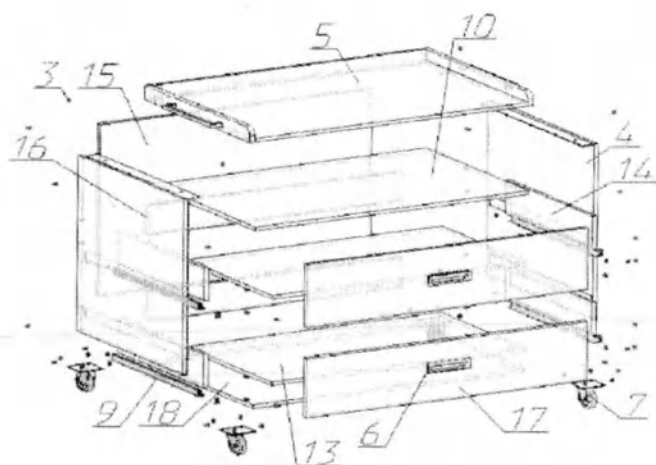


1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Прикрепить полку (10) к боковинам (4) на винты (2) через заклепки (1).
3. Установить ручки (6) в фасады (17).
4. Прикрепить боковины (4) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
5. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Собрать детали ящиков (13, 14, 16), между собой при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Прикрепить фасады (17) к корпусам ящиков при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить столешницу (5) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (3).
9. Установить выдвижные ящики при помощи направляющих (9), прикрепив части направляющих к боковинам (4) и боковинам ящиков (14) при помощи винтов (2) через заклепки (1).

Стол медицинский инструментальный широкий с тремя выдвижными ящиками, артикул 100178

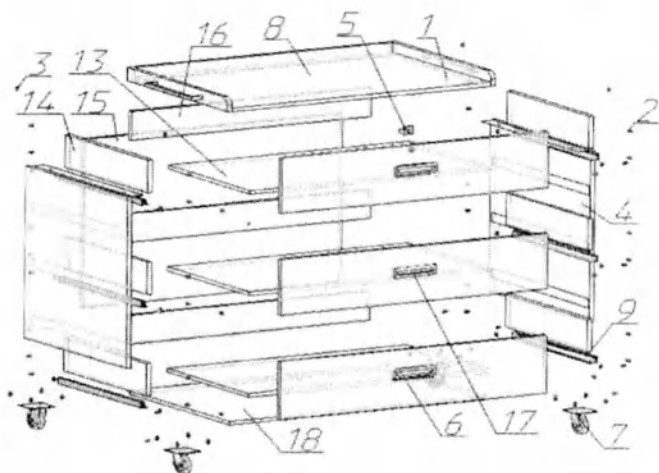


1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Установить замок (5) в нижний фасад (17).
3. Установить ручки (6) в фасады (17).
4. Прикрепить боковины (4) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
5. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Собрать детали ящиков (13, 14, 16), между собой при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Прикрепить фасады (17) к корпусам ящиков при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить столешницу (8) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (3).
9. Установить выдвижные ящики при помощи направляющих (9), прикрепив части направляющих к боковинам (4) и боковинам ящиков (14) при помощи винтов (2) через заклепки (1).

Стол медицинский инструментальный с двумя выдвижными ящиками и дверками, артикул 100179

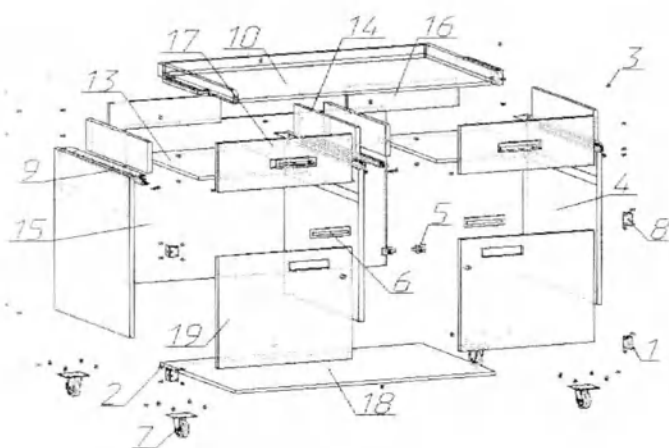

1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Установить замок (5) в нижний фасад (19).
3. Установить ручки (6) в фасады (17, 19).
4. Прикрепить петли (8) к фасадам (19) при помощи винтов (2).
5. Прикрепить боковины (4) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Собрать детали ящиков (13, 14, 16), между собой при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить фасады (17) к корпусу ящика при помощи винтов (2) через заклепки (1).
9. Прикрепить столешницу (10) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (3).
10. Установить выдвижные ящики при помощи направляющих (9), прикрепив части направляющих к боковинам (4) и боковинам ящиков (14) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
11. Навесить фасад (19) при помощи петель (8), прикрутив части петель к правой боковине (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).


Стол медицинский инструментальный с четырьмя выдвижными ящиками и дверкой, артикул 100180

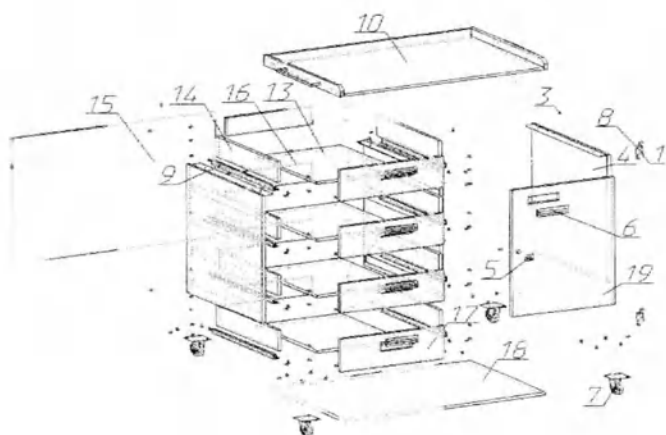


1. Прикрепить колесные опоры (7) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
2. Установить замок (5) в нижний фасад (19).
3. Установить ручки (6) в фасады (17, 19).
4. Прикрепить петли (8) к фасадам (19) при помощи винтов (2).
5. Прикрепить боковины (4) ко дну (18) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
6. Прикрепить заднюю стенку (15) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
7. Собрать детали ящиков (13, 14, 16), между собой при помощи винтов (2) через заклепки (1).
8. Прикрепить фасад (17) к корпусу ящика при помощи винтов (2) через заклепки (1).
9. Прикрепить столешницу (10) к боковинам (4) при помощи винтов (2) через футорки (3).
10. Установить выдвижной ящик при помощи направляющих (9), прикрепив части направляющих к боковинам (4) и боковинам ящиков (14) при помощи винтов (2) через заклепки (1).
11. Навесить фасад (19) при помощи петель (8), прикрутив части петель к правой боковине (4) при помощи винтов (2) через заклепки (1).

Инструкция по сборке «Шкаф медицинский, в вариантах исполнения»:

Шкаф медицинский с двумя дверьми и пятью полками, с регулируемыми опорами, артикул 100219

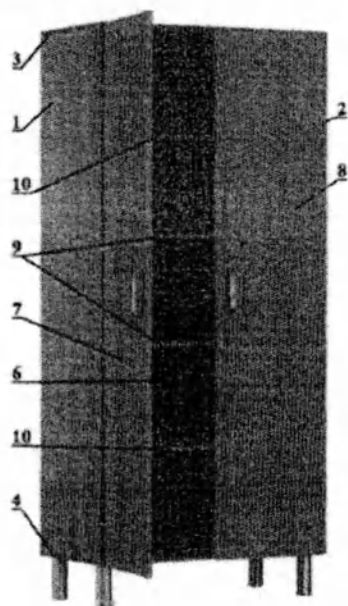


1. При помощи конфирматов и шкантов скрепить боковые стенки (1, 2) с крышкой (3), полками (9), дном (4).
2. С помощью шурупов и стыковочного профиля скрепить стенку заднюю (6) с боковыми стенками (1, 2), крышкой (3) и дном (4).
3. Между боковинами (1, 2) на полкодержателях установить полки (10).
4. Прикрепить петли к дверям (7, 8) при помощи евровинтов.
5. Прикрепить двери (7, 8) к боковым стенкам при помощи евровинтов, отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

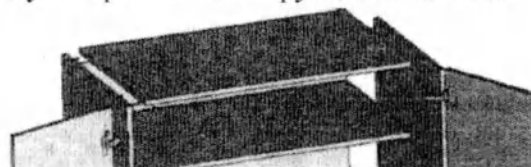


6. Используя винты на двери (7, 8) прикрепить ручки, а на дно с помощью шурупов установить регулируемые опоры.

Шкаф медицинский двустворчатый, с двумя вертикальными отделениями, с регулируемыми опорами, артикул 100220

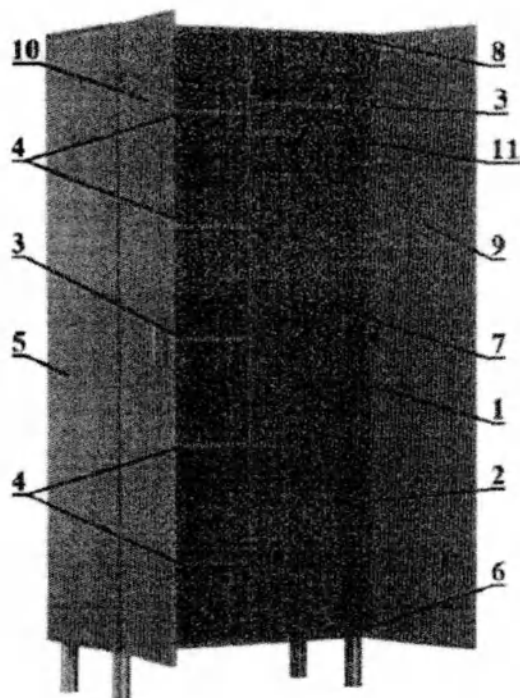


1. Соединить стенки (1, 2, 5) с крышкой (8) и дном (6) с помощью конфирматов и шкантов.
2. Установить при помощи конфирматов и шкантов полки (3).
3. С помощью шурупов прикрепить стенки задние (7) к боковым стенкам (1, 5), крышке (8), дну (6) и стойке (2).
4. Между стойкой (2) и боковой стенкой (5) на полкодержателях установить полки (4), а также прикрепить при помощи шурупов штангодержатели и установить штангу.

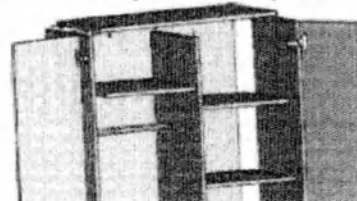


5. Прикрепить петли к дверям (9, 10) при помощи евровинтов.
6. Прикрепить двери (9, 10) к боковым стенкам при помощи евровинтов, отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.
7. Используя винты на двери (9, 10) прикрепить ручки, а на дно с помощью шурупов установить регулируемые опоры.


Шкаф медицинский одностворчатый с открытой секцией, артикул 100233

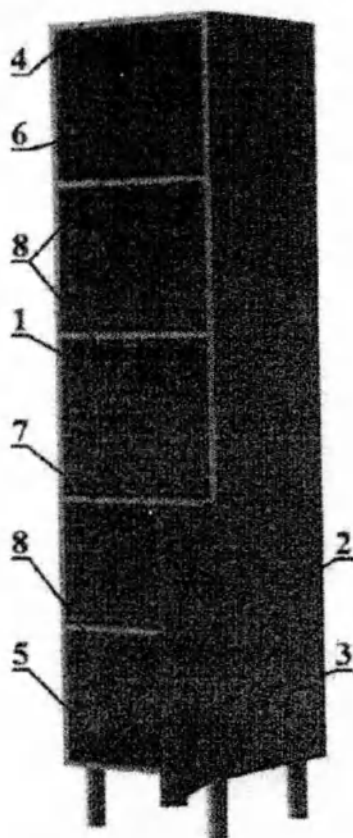

1. При помощи конфирмагов и шкантов скрепить боковые стенки (1,2) с крышкой (4), полкой (8), дном (5) и шкантами с порогом (6).
2. С помощью шурупов скрепить стенку заднюю (6) с боковыми стенками (1, 2), крышкой (4) и дном (5).

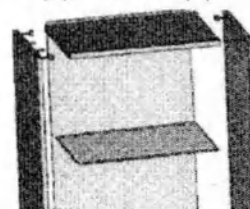


3. Между боковинами (1, 2) на полкодержателях установить полки (9).
4. С помощью петель навесить дверь (3), отрегулировать ее положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

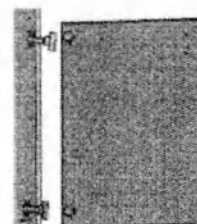


5. Используя винты на дверь (3) прикрепить ручку-скобу, а под боковины (1, 2) с помощью саморезов установить регулируемые опоры.

Шкаф медицинский одностворчатый с двумя дверцами, артикул 100234

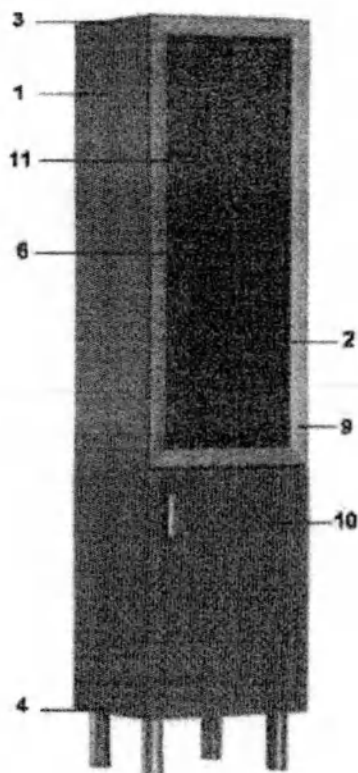


1. При помощи конфирматов и шкантов скрепить боковые стенки (1, 2) с крышкой (3), полкой (7), дном (4).

2. С помощью шурупов скрепить стенку заднюю (6) с боковыми стенками (1, 2), крышкой (3) и дном (4).

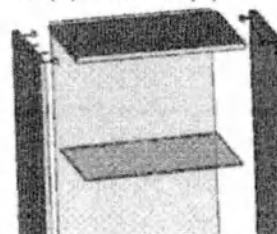


3. Между боковинами (1, 2) на полкодержателях установить полку (8) и стеклянные полки (11).

4. С помощью петель навесить дверь (10) и стеклянную дверь (9), отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

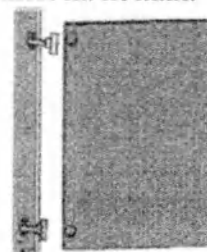


5. Используя винты на двери (9, 10) прикрепить ручки, а под боковины (1, 2) с помощью саморезов установить регулируемые опоры.

Шкаф медицинский двухсекционный, двустворчатый с четырьмя дверцами, артикул 100235

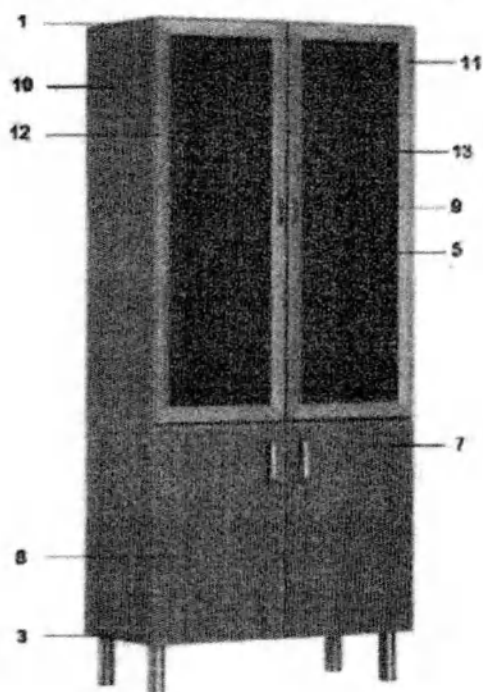

1. Скрепить при помощи стяжек-эксцентров и шкантов боковые стенки (9, 10) с крышкой (1), с полкой (2), дном (3).

2. С помощью саморезов или гвоздей скрепить стенку заднюю (5) с боковыми стенками (9, 10), крышкой (1) и дном (3).

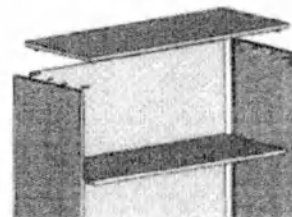

3. Между боковинами (9, 10) на полкодержателях установить полку (6) и стеклянные полки (13).

4. С помощью петель навесить двери (7, 8) и стеклянные двери (11, 12), отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

5. Используя винты на двери (7, 8, 11, 12) прикрепить ручки, а под боковины (9, 10) с помощью саморезов установить регулируемые опоры.


Инструкция по сборке «Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения»:

Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100236;



Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100237;

Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100238;

Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100239

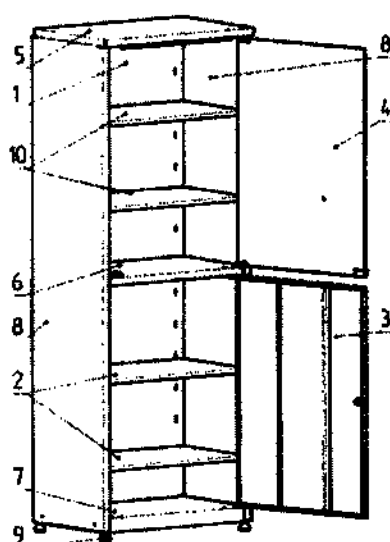

1. Соединить стенки задние (1) при помощи винтов и гаек М5. Работы производить на ровной и чистой поверхности.

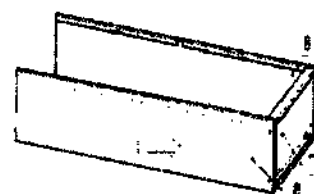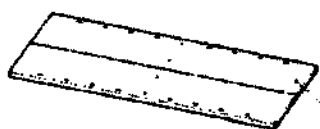

2. Вставить боковые стенки (8) в короб нижний (7) и закрепить при помощи саморезов 4,2х13.


3. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2х13.

4. Прикрепить короб верхний (5) при помощи винтов и гаек М5.

5. Прикрепить короб средний (6) - завести в пазы на боковых стенках (8) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.


6. Прикрепить регулируемые опоры (9) к коробу нижнему (7).

Если шкаф оснащен ножками металлическими (16) прикрепить их к корпусу нижнему (7) при помощи болтов М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (9).

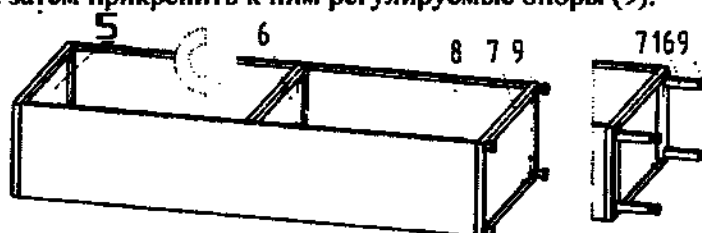

8. Собрать дверь металлическую (3), вставить замок мебельный (14).

9. Собрать дверь стеклянную (4): прикрепить ручку и петли (17).

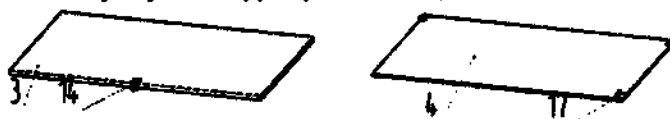


10. Установить защелки магнитные (13) при помощи саморезов 3x17.

11. Установить втулки (15) в места крепления дверей.

12. Установить двери (3). Для этого вставить винт М5 через отверстие в двери во втулку, а затем подогнуть фиксатор на двери.

13. Установить двери (4).

14. Установить полки (2, 10) на полкодержатели (18).

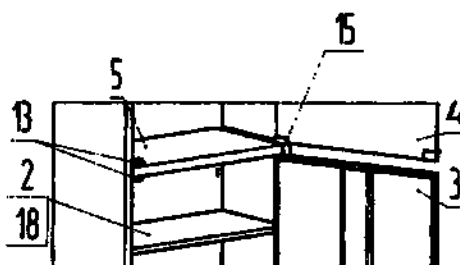


Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100240;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100241;


Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100242;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100243

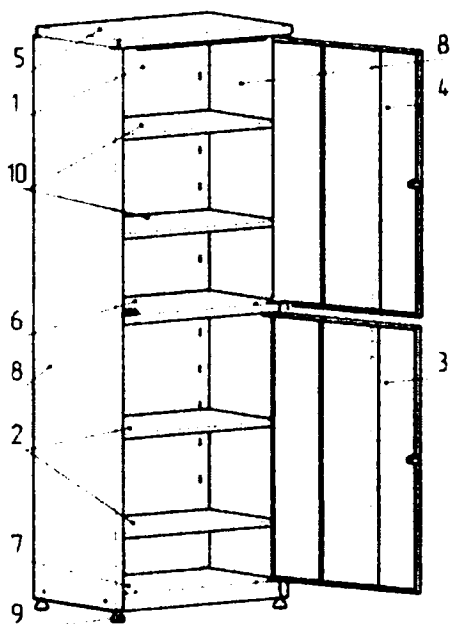

1. Соединить боковые стенки (8) со стенкой задней (1). Для этого нужно завести боковые стенки сверху в отгибы в задней стенке. Зафиксировать их винтами.
2. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2x13.
3. Прикрепить короб средний (6) - завести в пазы на боковых стенках (8) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.
4. Установить втулки ПВХ в отверстия в коробе среднем сверху и снизу и в коробе верхнем.
5. Установить оси в короб средний и в верхнее отверстие двери. Поставить верхнюю дверь (4).
6. Прикрепить короб верхний (5) при помощи винтов и гаек М5.
7. Снизу установить короб нижний (7), предварительно вставив в него втулку ПВХ, в верхнее отверстие двери — ось.
8. Установить нижнюю дверь, а короб нижний скрепить винтами.


9. Закрутить в короб нижний регулируемые опоры (9) и выставить ими такое положение шкафа, при котором двери открываются и закрываются свободно без заедания. Если шкаф оснащен ножками металлическими (16) прикрепить их к коробу нижнему (7) при помощи болтов М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (9).

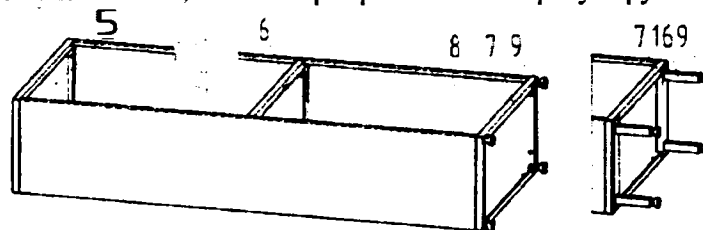

8. Собрать дверь металлическую (3, 4), вставить замок мебельный (14).



10. Установить защелки магнитные (13) при помощи саморезов 3x17.
14. Установить полки (2, 10) на полкодержатели (18).

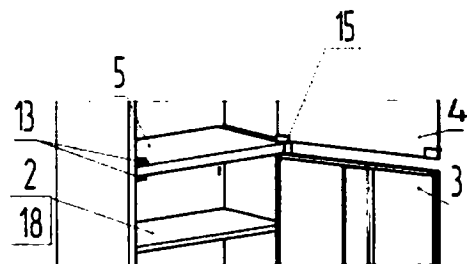


Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100244;


Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100245;

Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100246;

Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100247

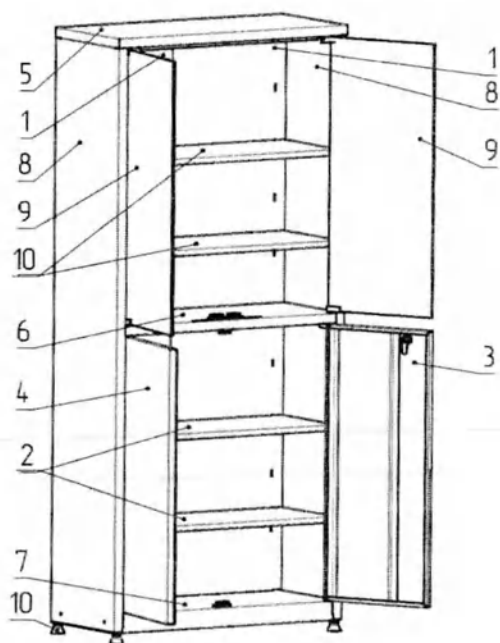

1. Соединить стенки задние (1) при помощи винтов и гаек М5. Работы производить на ровной и чистой поверхности.

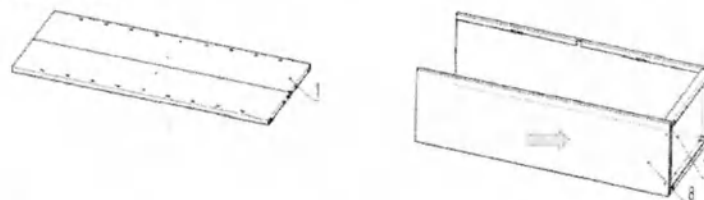

2. Вставить боковые стенки (8) в короб нижний (7) и закрепить при помощи саморезов 4,2x13.


3. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2x13.

4. Прикрепить короб верхний (5) при помощи винтов и гаек М5.

5. Прикрепить короб средний (6) - завести в пазы на боковых стенках (8) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.

6. Прикрепить регулируемые опоры (11) к коробу нижнему (7).

7. Если шкаф оснащен ножками металлическими (21) прикрепить их к коробу нижнему (7) при помощи болтов М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (11).

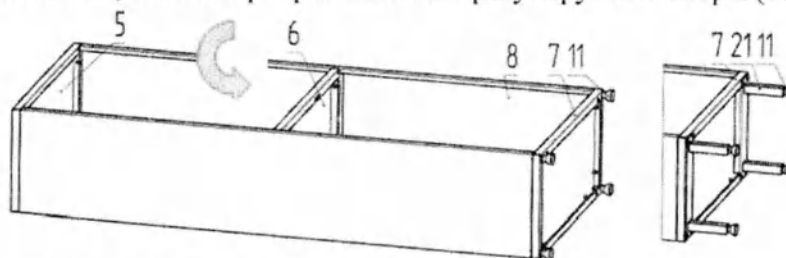

8. Собрать двери металлические (3): вставить замок мебельный (15).

9. Собрать двери стеклянные (9): прикрепить ручку (18) и нижние петли (19).




10. Установить защелки магнитные (15) при помощи саморезов 3x17.

11. Установить втулки (16) в места крепления дверей.

12. Установить двери (3, 4). Для этого вставить винт М5 через отверстие в двери во втулку, а затем подогнуть фиксатор на двери.

13. Установить двери (9). Для этого установить дверь с нижней петлей во втулку, затем установить верхнюю петлю и зафиксировать.

14. Установить полки (2) и (10) на полкодержатели (20).

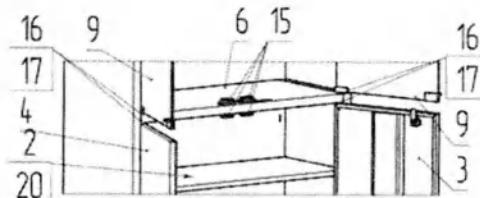


Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100248;



Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100249;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100250;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100251

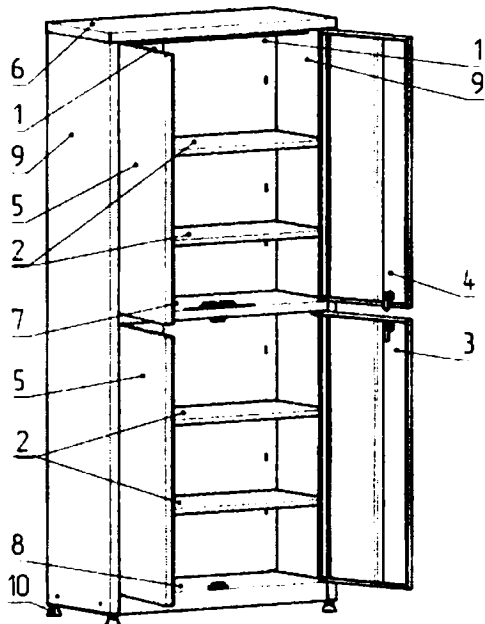

1. Соединить стенки задние (1) при помощи винтов и гаек М5. Работы производить на ровной и чистой поверхности.

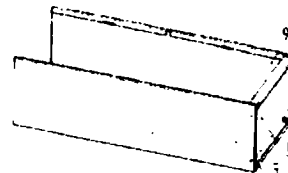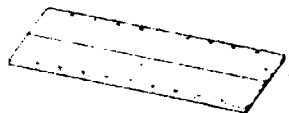

2. Вставить боковые стенки (9) в короб нижний (8) и закрепить при помощи саморезов 4,2х13.

3. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2х13.


4. Прикрепить короб верхний (6) при помощи винтов и гаек М5.

5. Прикрепить короб средний (7) - завести в пазы на боковых стенках (9) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.

6. Прикрепить регулируемые опоры (10) к коробу нижнему (8).

Если шкаф оснащен ножками металлическими (18) прикрепить их к коробу нижнему (8) при помощи болтов М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (10).

7. Собрать двери металлические (3, 4): вставить замок мебельный (14).

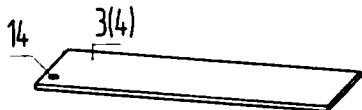


8. Установить защелки магнитные (13) при помощи саморезов 3х17.

10. Установить втулки (14) в места крепления дверей.


11. Установить двери (3, 4, 5). Для этого вставить винт М5 через отверстие в двери во втулку, а затем подогнуть фиксатор на двери.

12. Установить полки (2) на полкодержатели (17).

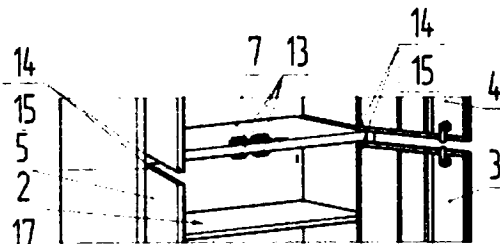

Тележка для перевозки больных с подголовником, артикул 100262;
Тележка для перевозки больных со ступенчатым подголовником, артикул 100263


1. Собрать каркас тележки из боковин и стяжек с использованием болтов М10х45 и шайб 10 пружинных.
2. Прикрепить колеса к каркасу при помощи винтов М10х25 и шайб 10 пружинных.
В случае затруднения установки винтов в колеса необходимо открутить ось вращения ролика колеса и удалить его. После крепления вилки колеса установить ролик в обратном порядке. Для более надежной фиксации резьбы рекомендуем винты посадить на краску.
3. Вставить съемную панель в каркас.

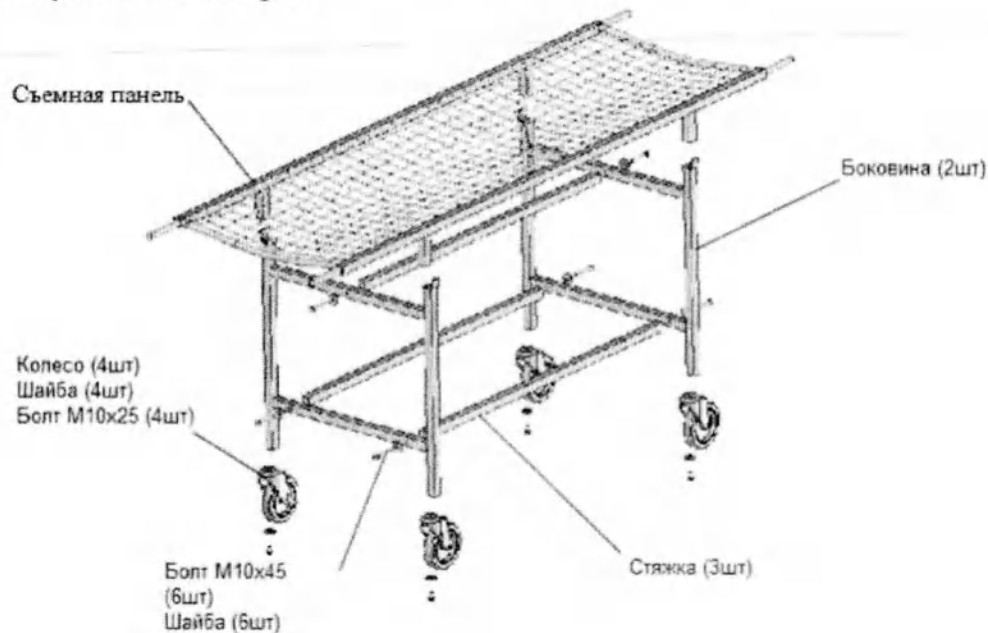

Инструкция по сборке «Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения»:


Кушетка медицинская смотровая бесступенчатая, артикул 100265

1. Соединить болтами раму и стойки, вставив упор в ушко на левой стойке. При этом ушко должно быть повернуто в сторону стойки.
2. Прикрепить болтами стяжку к стойкам.

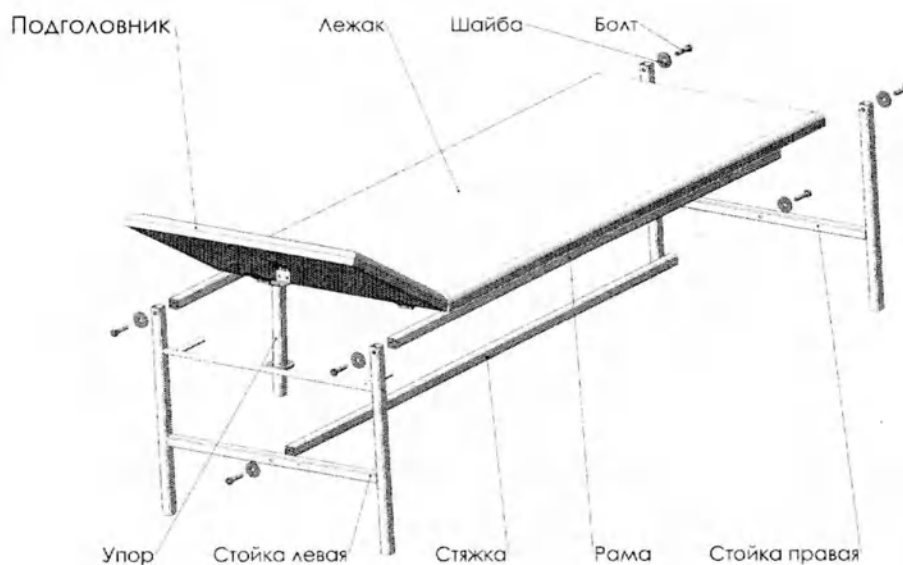

Кушетка медицинская смотровая со ступенчатым подголовником, артикул 100266

1. Прикрепить ножки к каркасу при помощи пары гаек М10 застопорив их пружинной шайбой 10.
2. Вставить в ножки заглушки.

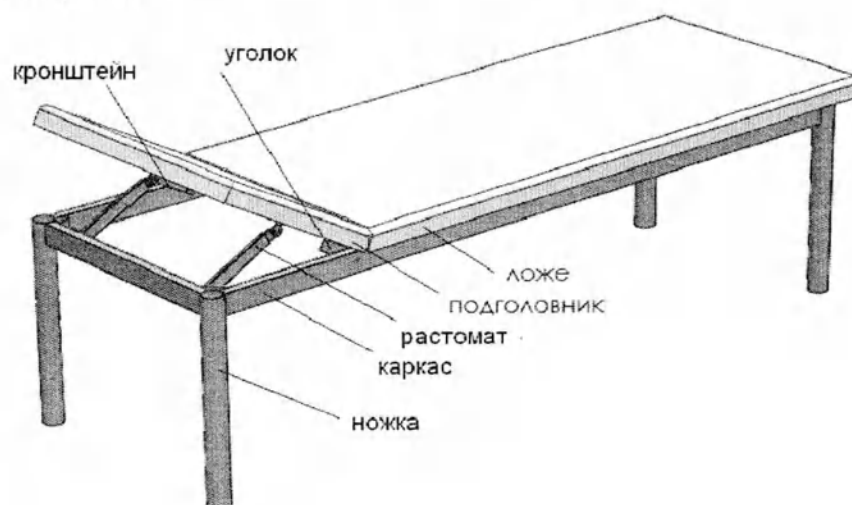

Инструкция по сборке «Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения» и «Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения»:

Ширма медицинская стационарная, 1 секция, артикул 100284;


Ширма медицинская стационарная, 2 секции, артикул 100285;

Ширма медицинская стационарная, 3 секции, артикул 100286;

Ширма медицинская передвижная, 1 секция, артикул 100290;

Ширма медицинская передвижная, 2 секции, артикул 100291;

Ширма медицинская передвижная, 3 секции, артикул 100292

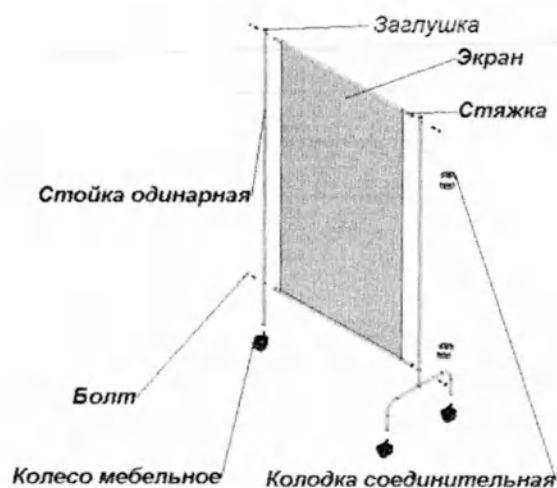

1. Продеть стяжки через полотно экрана.
2. Прикрепить стяжки экрана к стойкам болтами.
3. В зависимости от исполнения прикрепить колеса или вставить заглушки.
4. Соединить секции при помощи соединительных колодок.
5. Вставить заглушки в стойки.

Ширма медицинская стационарная, 1 секция, артикул 100287;


Ширма медицинская стационарная, 2 секции, артикул 100288;

Ширма медицинская стационарная, 3 секции, артикул 100289;

Ширма медицинская передвижная, 1 секция, артикул 100293;


Ширма медицинская передвижная, 2 секции, артикул 100294;

Ширма медицинская передвижная, 3 секции, артикул 100295

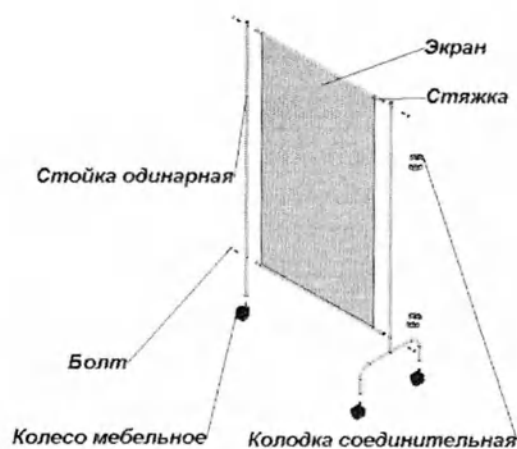


1. Продеть стяжки через полотно экрана.
2. Прикрепить стяжки экрана к стойкам болтами.
3. В зависимости от исполнения прикрепить колеса или вставить заглушки.
4. Соединить секции при помощи соединительных колодок.

Инструкция по сборке «Штатив медицинский передвижной с регулировкой высоты»
Инструкция по сборке «Штатив медицинский передвижной с регулировкой высоты, артикул 100298»

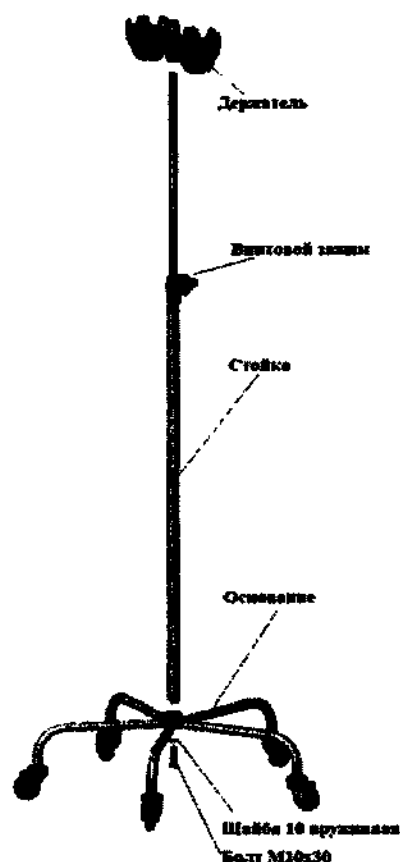

1. С помощью винтов M10x30 и пружинных шайб 10 закрепить колеса на основании.

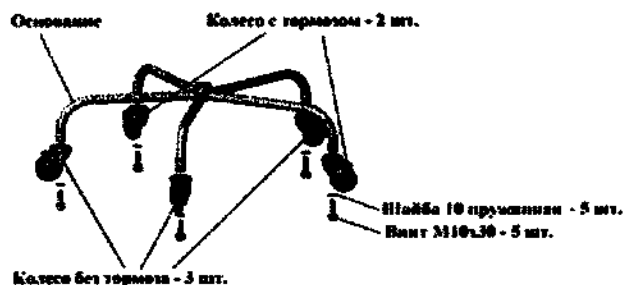


2. Держатель насадить на стойку с усилием, исключая свободный съем его со стойки. С помощью винта M10x30 и пружинной шайбы 10 соединить стойку с основанием.

Внешний вид. Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100118



Внешний вид. Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, артикул 100121;

Тумба медицинская подкатная с верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой № 2, артикул 100123

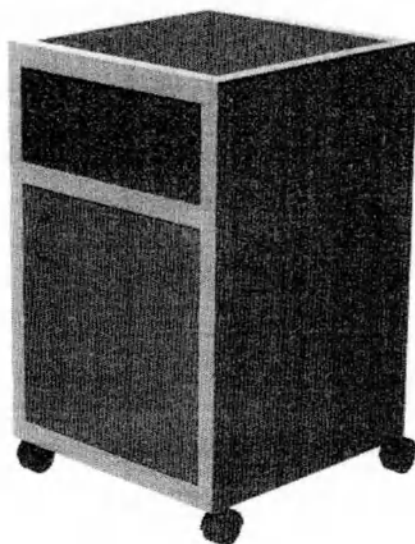

Внешний вид. Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100122;

Тумба медицинская подкатная с выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, артикул 100124




Внешний вид. Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100125;


Тумба медицинская подкатная с одним отделением с дверкой и полкой, артикул 100126




Внешний вид. Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками, артикул 100127;
Тумба медицинская подкатная с тремя выдвижными ящиками № 2, артикул 100128

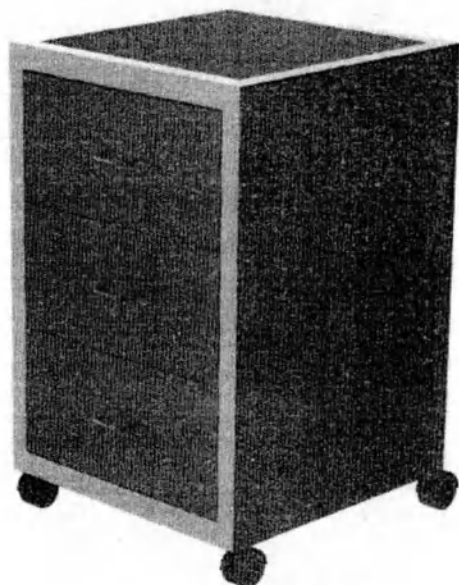


Внешний вид. Шкаф медицинский навесной двустворчатый, артикул 100221

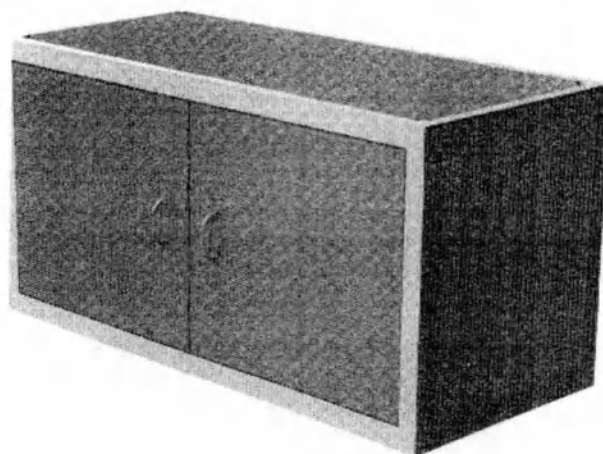


Внешний вид. Шкаф медицинский навесной двустворчатый остекленный, артикул 100222

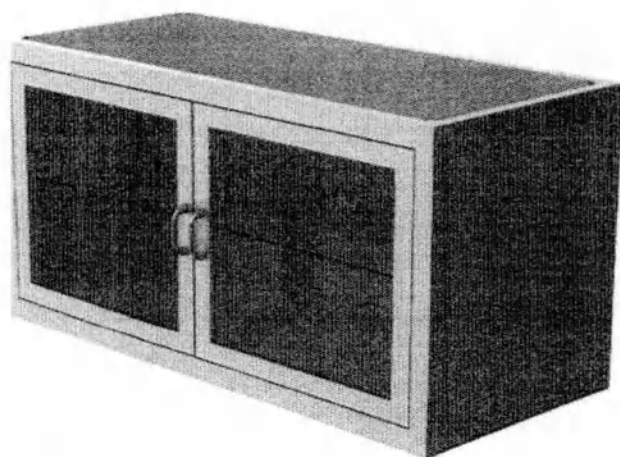

Внешний вид. Шкаф медицинский навесной двустворчатый с полкой, артикул 100223

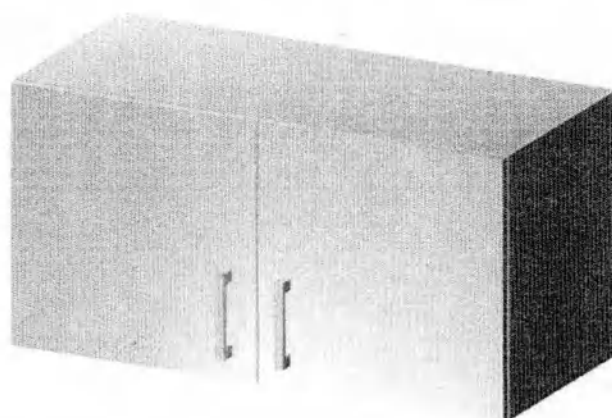

Внешний вид. Шкаф медицинский навесной двустворчатый остекленный с полкой, артикул 100224

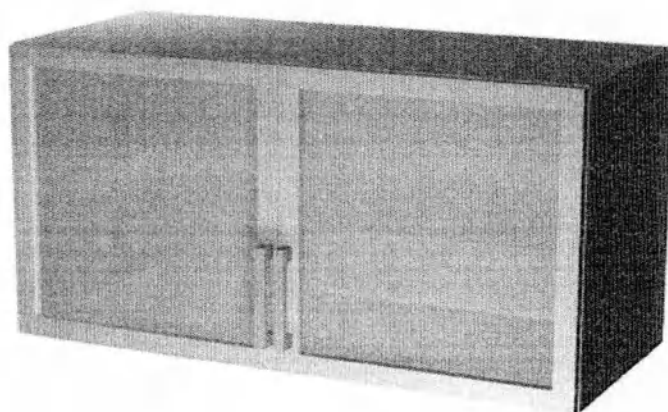

Внешний вид. Стол медицинский с мойкой и тумбой, широкий, правый, артикул 100191



Внешний вид. Стол медицинский с мойкой и тумбой, широкий, левый, артикул 100192



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Набор мебели медицинской для оснащения процедурного кабинета

обозначение (модификация)

сериинный номер _____,
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных)
стандартов, действующей технической документацией (ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022) и признан(а) год-
ным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
личная подпись

расшифровка подписи

МП

год, месяц, число

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель: Индивидуальный предприниматель Костров Александр Анатольевич

Адрес:

Тел.

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Набор мебели медицинской для оснащения процедурного кабинета

по ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022

обозначение (модификация)

Серийный № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия _____

б) Заполняет продавец

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняет исполнитель

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Исполнитель _____
подпись

Прем ТД
(93) обсерватор 2
незд
Уч Каспоб АА.


Handwritten signature

12

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель Костров

Александр Анатольевич

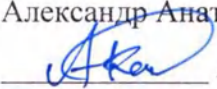 А.А. Костров

«15» 11 2023 г.

Руководство по эксплуатации

Набор мебели медицинской для оснащения физиотерапевтического кабинета
(выпущено впервые)

2023 г.

1. Наименование и область применения медицинского изделия.

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с основными техническими данными, устройством и правилами пользования медицинским изделием «**Набор мебели медицинской для оснащения физиотерапевтического кабинета**», изготавливаемым по ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022 (далее по тексту - *Набор*) и предназначенным для оснащения физиотерапевтического кабинета в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля.

Область применения - лечебно-профилактические учреждения любого профиля.

Набор выпускается в следующих вариантах комплектации:

1.	Набор мебели медицинской для оснащения физиотерапевтического кабинета №1, в составе:
1.1	Кушетка медицинская физиотерапевтическая, в вариантах исполнения (1 шт. из перечня:
1.1.1	Кушетка медицинская физиотерапевтическая со ступенчатым подголовником, артикул 100270, в составе:
1.1.1.1	Каркас с лежаком и подголовником в сборе - 1 шт.;
1.1.1.2	Ножка - 4 шт.;
1.1.1.3	Поперечная царга - 2 шт.;
1.1.1.4	Болт мебельный М8х70 ГОСТ 7801 - 16 шт.;
1.1.1.5	Шайба 8 плоская ГОСТ 11371 - 16 шт.;
1.1.1.6	Гайка М8 ГОСТ 5915 - 16 шт.;
1.1.1.7	Уголок - 8 шт.;
1.1.1.8	Саморез 5х20 - 16 шт.;
1.1.2	Кушетка медицинская физиотерапевтическая со ступенчатым подголовником, усиленная, артикул 100271, в составе:
1.1.2.1	Каркас с лежаком и подголовником в сборе - 1 шт.;
1.1.2.2	Ножка - 4 шт.;
1.1.2.3	Поперечная царга - 2 шт.;
1.1.2.4	Болт мебельный М8х70 ГОСТ 7801 - 16 шт.;
1.1.2.5	Шайба 8 плоская ГОСТ 11371 - 16 шт.;
1.1.2.6	Гайка М8 ГОСТ 5915 - 16 шт.;
1.1.2.7	Уголок - 8 шт.;
1.1.2.8	Саморез 5х20 - 16 шт.;
1.2	Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
1.2.1	Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями, артикул 100252, в составе:
1.2.1.1	Крышка - 1 шт.;
1.2.1.2	Стенка задняя - 1 шт.;
1.2.1.3	Стенка боковая (лев., прав.) - 2 шт.;
1.2.1.4	Короб нижний - 1 шт.;
1.2.1.5	Лист нижний - 1 шт.;
1.2.1.6	Дверь - 1 шт.;
1.2.1.7	Полка - 2 шт.;
1.2.1.8	Регулируемая опора - 4 шт.;
1.2.1.9	Винт М5х12 - 54 шт.;
1.2.1.10	Шайба 5 - 54 шт.;
1.2.1.11	Замок мебельный - 1 шт.;
1.2.1.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная - 2/2 шт.;
1.2.1.13	Саморез 3х17 - 2 шт.;
1.2.1.14	Защелка магнитная - 1 шт.;
1.2.2	Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, одностворчатый с двумя полками, артикул 100253, в составе:
1.2.2.1	Крышка - 1 шт.;
1.2.2.2	Стенка задняя - 1 шт.;
1.2.2.3	Полка верхняя - 1 шт.;

1.2.2.4	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.2.2.5	Короб нижний – 1 шт.;
1.2.2.6	Лист нижний – 1 шт.;
1.2.2.7	Дверь – 2 шт.;
1.2.2.8	Простенок – 1 шт.;
1.2.2.9	Полка – 3 шт.;
1.2.2.10	Полкодержатель – 12 шт.;
1.2.2.11	Штанга – 1 шт.;
1.2.2.12	Штангодержатель – 2 шт.;
1.2.2.13	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.2.2.14	Винт М5х12 – 67 шт.;
1.2.2.15	Шайба 5 – 67 шт.;
1.2.2.16	Замок мебельный – 2 шт.;
1.2.2.17	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
1.2.3	Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями, широкий, артикул 100254, в составе:
1.2.3.1	Крышка – 1 шт.;
1.2.3.2	Стенка задняя – 1 шт.;
1.2.3.3	Полка верхняя – 1 шт.;
1.2.3.4	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
1.2.3.5	Короб нижний – 1 шт.;
1.2.3.6	Лист нижний – 1 шт.;
1.2.3.7	Дверь – 2 шт.;
1.2.3.8	Простенок – 1 шт.;
1.2.3.9	Полка – 3 шт.;
1.2.3.10	Полкодержатель – 12 шт.;
1.2.3.11	Штанга – 1 шт.;
1.2.3.12	Штангодержатель – 2 шт.;
1.2.3.13	Регулируемая опора – 4 шт.;
1.2.3.14	Винт М5х12 – 67 шт.;
1.2.3.15	Шайба 5 – 67 шт.;
1.2.3.16	Замок мебельный – 2 шт.;
1.2.3.17	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
1.3	Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
1.3.1	Ширма медицинская стационарная, 1 секция, артикул 100284, в составе:
1.3.1.1	Экран – 1 шт.;
1.3.1.2	Стяжка – 2 шт.;
1.3.1.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
1.3.1.4	Стойка двойная – 1 шт.;
1.3.1.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
1.3.1.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
1.3.1.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
1.3.1.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
1.3.1.9	Шайба 4 – 2 шт.;
1.3.1.10	Гайка М4 – 2 шт.;
1.3.1.11	Заглушка МСК302/4 – 5 шт.;
1.3.2	Ширма медицинская стационарная, 2 секции, артикул 100285, в составе:
1.3.2.1	Экран – 1 шт.;
1.3.2.2	Стяжка – 2 шт.;
1.3.2.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
1.3.2.4	Стойка двойная – 1 шт.;
1.3.2.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
1.3.2.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
1.3.2.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
1.3.2.8	Болт М4х20 – 2 шт.;

1.3.2.9	Шайба 4 – 2 шт.;
1.3.2.10	Гайка М4 – 2 шт.;
1.3.2.11	Заглушка МСК302/4 – 5 шт.;
1.3.3	Ширма медицинская стационарная, 3 секции, артикул 100286, в составе:
1.3.3.1	Экран – 1 шт.;
1.3.3.2	Стяжка – 2 шт.;
1.3.3.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
1.3.3.4	Стойка двойная – 1 шт.;
1.3.3.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
1.3.3.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
1.3.3.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
1.3.3.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
1.3.3.9	Шайба 4 – 2 шт.;
1.3.3.10	Гайка М4 – 2 шт.;
1.3.3.11	Заглушка МСК302/4 – 5 шт.;
1.3.4	Ширма медицинская стационарная, 1 секция, на плоских ножках, артикул 100287, в составе:
1.3.4.1	Экран – 1 шт.;
1.3.4.2	Стяжка – 2 шт.;
1.3.4.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
1.3.4.4	Стойка двойная – 1 шт.;
1.3.4.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
1.3.4.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
1.3.4.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
1.3.4.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
1.3.4.9	Шайба 4 – 2 шт.;
1.3.4.10	Гайка М4 – 2 шт.;
1.3.5	Ширма медицинская стационарная, 2 секции, на плоских ножках, артикул 100288, в составе:
1.3.5.1	Экран – 1 шт.;
1.3.5.2	Стяжка – 2 шт.;
1.3.5.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
1.3.5.4	Стойка двойная – 1 шт.;
1.3.5.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
1.3.5.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
1.3.5.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
1.3.5.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
1.3.5.9	Шайба 4 – 2 шт.;
1.3.5.10	Гайка М4 – 2 шт.;
1.3.6	Ширма медицинская стационарная, 3 секции, на плоских ножках, артикул 100289, в составе:
1.3.6.1	Экран – 1 шт.;
1.3.6.2	Стяжка – 2 шт.;
1.3.6.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
1.3.6.4	Стойка двойная – 1 шт.;
1.3.6.5	Колодка ПВХ, соединительная – 4 шт.;
1.3.6.6	Болт М6х30 – 4 шт.;
1.3.6.7	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
1.3.6.8	Болт М4х20 – 2 шт.;
1.3.6.9	Шайба 4 – 2 шт.;
1.3.6.10	Гайка М4 – 2 шт.;
1.4	Тележка для перевозки больных, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
1.4.1	Тележка для перевозки больных с подголовником, артикул 100262, в составе:
1.4.1.1	Боковина – 2 шт.;
1.4.1.2	Стяжка – 3 шт.;

1.4.1.3	Съемная панель – 1 шт.;
1.4.1.4	Болт М10х45 – 6 шт.;
1.4.1.5	Шайба 10 пружинная – 10 шт.;
1.4.1.6	Винт М10х25 – 4 шт.;
1.4.1.7	Колесо с тормозом, диаметром 125 мм – 2 шт.;
1.4.1.8	Колесо без тормоза, диаметром 125 мм – 2 шт.;
1.4.1.9	Матрац – 1 шт.;
1.4.2	Тележка для перевозки больных со ступенчатым подголовником, артикул 100264, в составе:
1.4.2.1	Боковина – 2 шт.;
1.4.2.2	Стяжка – 3 шт.;
1.4.2.3	Съемная панель – 1 шт.;
1.4.2.4	Болт М10х45 – 6 шт.;
1.4.2.5	Шайба 10 пружинная – 10 шт.;
1.4.2.6	Винт М10х25 – 4 шт.;
1.4.2.7	Колесо с тормозом, диаметром 125 мм – 2 шт.;
1.4.2.8	Колесо без тормоза, диаметром 125 мм – 2 шт.;
1.4.2.9	Матрац – 1 шт.;
1.5	Тумба медицинская под аппаратуру, артикул 100139 - 1 шт. (при необходимости), в составе:
1.5.1	Боковая стенка – 2 шт.;
1.5.2	Задняя стенка – 1 шт.;
1.5.3	Порог – 1 шт.;
1.5.4	Дно, верх – 2 шт.;
1.5.5	Полка – 2 шт.;
1.5.6	Дверь – 2 шт.;
1.5.7	Стяжка- ТЕ 15 – 4 шт.;
1.5.8	Шток – 4 шт.;
1.5.9	Конфирмат – 4 шт.;
1.5.10	Ключ шестигранный – 1 шт.;
1.5.11	Шкант 8х30 – 12 шт.;
1.5.12	Петля – 4 шт.;
1.5.13	Ручка-скоба – 2 шт.;
1.5.14	Шуруп 2А3-13 – 30 шт.;
1.5.15	Подпятник – 4 шт.;
1.5.16	Полкодержатель – 8 шт.;
1.5.17	Заглушка эксцентрик – 4 шт.;
1.5.18	Заглушка конфирмат – 4 шт.;
1.5.19	Профиль стыковочный – 1 шт.;
1.6	Стол медицинский, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
1.6.1	Стол медицинский 850х750х750 мм, артикул 100168, в составе:
1.6.1.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
1.6.1.2	Ножка – 4 шт.;
1.6.1.3	Перемычка – 1 шт.;
1.6.1.4	Гайка М10 – 4 шт.;
1.6.1.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
1.6.2	Стол медицинский 1000х750х750 мм, артикул 100169, в составе:
1.6.2.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
1.6.2.2	Ножка – 4 шт.;
1.6.2.3	Перемычка – 1 шт.;
1.6.2.4	Гайка М10 – 4 шт.;
1.6.2.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
1.6.3	Стол медицинский 850х750х750 мм №2, артикул 100170, в составе:
1.6.3.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
1.6.3.2	Ножка – 4 шт.;
1.6.3.3	Перемычка – 1 шт.;

1.6.3.4	Гайка М10 – 4 шт.;
1.6.3.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
1.6.4	Стол медицинский 1000х750х750 мм №2, артикул 100171, в составе:
1.6.4.1	Каркас- столешница – 1 шт.;
1.6.4.2	Ножка – 4 шт.;
1.6.4.3	Перемышка – 1 шт.;
1.6.4.4	Гайка М10 – 4 шт.;
1.6.4.5	Шайба пружинная 10 – 4 шт.
1.7	Руководство по эксплуатации – 1 шт.
2.	Набор мебели медицинской для оснащения физиотерапевтического кабинета №2, в составе:
2.1	Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
2.1.1	Ширма медицинская передвижная, 1 секция, артикул 100290, в составе:
2.1.1.1	Экран – 1 шт.;
2.1.1.2	Стяжка – 2 шт.;
2.1.1.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
2.1.1.4	Стойка двойная – 1 шт.;
2.1.1.5	Колесо – 3 шт.;
2.1.1.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
2.1.1.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
2.1.1.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
2.1.1.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
2.1.1.10	Шайба 4 – 2 шт.;
2.1.1.11	Гайка М4 – 2 шт.;
2.1.1.12	Заглушка МСК302/4 – 2 шт.;
2.1.2	Ширма медицинская передвижная, 2 секции, артикул 100291, в составе:
2.1.2.1	Экран – 1 шт.;
2.1.2.2	Стяжка – 2 шт.;
2.1.2.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
2.1.2.4	Стойка двойная – 1 шт.;
2.1.2.5	Колесо – 3 шт.;
2.1.2.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
2.1.2.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
2.1.2.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
2.1.2.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
2.1.2.10	Шайба 4 – 2 шт.;
2.1.2.11	Гайка М4 – 2 шт.;
2.1.2.12	Заглушка МСК302/4 – 2 шт.;
2.1.3	Ширма медицинская передвижная, 3 секции, артикул 100292, в составе:
2.1.3.1	Экран – 1 шт.;
2.1.3.2	Стяжка – 2 шт.;
2.1.3.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
2.1.3.4	Стойка двойная – 1 шт.;
2.1.3.5	Колесо – 3 шт.;
2.1.3.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
2.1.3.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
2.1.3.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
2.1.3.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
2.1.3.10	Шайба 4 – 2 шт.;
2.1.3.11	Гайка М4 – 2 шт.;
2.1.3.12	Заглушка МСК302/4 – 2 шт.;
2.1.4	Ширма медицинская передвижная, 1 секция, на плоских ножках, артикул 100293, в составе:
2.1.4.1	Экран – 1 шт.;
2.1.4.2	Стяжка – 2 шт.;
2.1.4.3	Стойка одинарная – 1 шт.;

2.1.4.4	Стойка двойная – 1 шт.;
2.1.4.5	Колесо – 3 шт.;
2.1.4.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
2.1.4.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
2.1.4.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
2.1.4.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
2.1.4.10	Шайба 4 – 2 шт.;
2.1.4.11	Гайка М4 – 2 шт.;
2.1.5	Ширма медицинская передвижная, 2 секции, на плоских ножках, артикул 100294, в составе:
2.1.5.1	Экран – 1 шт.;
2.1.5.2	Стяжка – 2 шт.;
2.1.5.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
2.1.5.4	Стойка двойная – 1 шт.;
2.1.5.5	Колесо – 3 шт.;
2.1.5.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
2.1.5.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
2.1.5.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
2.1.5.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
2.1.5.10	Шайба 4 – 2 шт.;
2.1.5.11	Гайка М4 – 2 шт.;
2.1.6	Ширма медицинская передвижная, 3 секции, на плоских ножках, артикул 100295, в составе:
2.1.6.1	Экран – 1 шт.;
2.1.6.2	Стяжка – 2 шт.;
2.1.6.3	Стойка одинарная – 1 шт.;
2.1.6.4	Стойка двойная – 1 шт.;
2.1.6.5	Колесо – 3 шт.;
2.1.6.6	Колодка, соединительная – 4 шт.;
2.1.6.7	Болт М6х30 – 4 шт.;
2.1.6.8	Шайба 6 пружинная – 4 шт.;
2.1.6.9	Болт М4х20 – 2 шт.;
2.1.6.10	Шайба 4 – 2 шт.;
2.1.6.11	Гайка М4 – 2 шт.;
2.2	Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
2.2.1	Кушетка медицинская смотровая бесступенчатая, артикул 100265, в составе:
2.2.1.1	Ложе – 1 шт.;
2.2.1.2	Стойка левая – 1 шт.;
2.2.1.3	Стойка правая – 1 шт.;
2.2.1.4	Стяжка – 1 шт.;
2.2.1.5	Болт М10х45 – 6 шт.;
2.2.1.6	Шайба – 6 шт.;
2.2.1.7	Заглушка – 4 шт.;
2.2.2	Кушетка медицинская смотровая со ступенчатым подголовником, артикул 100266, в составе:
2.2.2.1	Ложе с каркасом и подголовником – 1 шт.;
2.2.2.2	Ножка – 4 шт.;
2.2.2.3	Гайка М10 – 8 шт.;
2.2.2.4	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;
2.2.2.5	Заглушка – 6 шт.;
2.3	Подставка для ног медицинская двухступенчатая, артикул 100283 - 1 шт. (при необходимости)
2.4	Кушетка медицинская физиотерапевтическая, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):

2.4.1	Кушетка медицинская физиотерапевтическая со ступенчатым подголовником, артикул 100270, в составе:
2.4.1.1	Каркас с лежаком и подголовником в сборе - 1 шт.;
2.4.1.2	Ножка - 4 шт.;
2.4.1.3	Поперечная царга - 2 шт.;
2.4.1.4	Болт мебельный М8х70 ГОСТ 7801 - 16 шт.;
2.4.1.5	Шайба 8 плоская ГОСТ 11371 - 16 шт.;
2.4.1.6	Гайка М8 ГОСТ 5915 - 16 шт.;
2.4.1.7	Уголок - 8 шт.;
2.4.1.8	Саморез 5х20 - 16 шт.;
2.4.2	Кушетка медицинская физиотерапевтическая со ступенчатым подголовником, усиленная, артикул 100271, в составе:
2.4.2.1	Каркас с лежаком и подголовником в сборе - 1 шт.;
2.4.2.2	Ножка - 4 шт.;
2.4.2.3	Поперечная царга - 2 шт.;
2.4.2.4	Болт мебельный М8х70 ГОСТ 7801 - 16 шт.;
2.4.2.5	Шайба 8 плоская ГОСТ 11371 - 16 шт.;
2.4.2.6	Гайка М8 ГОСТ 5915 - 16 шт.;
2.4.2.7	Уголок - 8 шт.;
2.4.2.8	Саморез 5х20 - 16 шт.;
2.5	Стол медицинский подкатной, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
2.5.1	Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты, артикул 100164, в составе:
2.5.1.1	Основание столика - 1 шт.;
2.5.1.2	Вертикальная направляющая - 1 шт.;
2.5.1.3	Стойка столешницы - 1 шт.;
2.5.1.4	Столешница - 1 шт.;
2.5.1.5	Винт М6 х 45 - 5 шт.;
2.5.1.6	Гайка М6 - 5 шт.;
2.5.1.7	Шайба 6 - 5 шт.;
2.5.1.8	Шуруп 5 X 15 - 8 шт.;
2.5.1.9	Рукоятка - 1 шт.;
2.5.1.10	Колесо - 4 шт.;
2.5.2	Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №2, артикул 100165, в составе:
2.5.2.1	Основание столика - 1 шт.;
2.5.2.2	Вертикальная направляющая - 1 шт.;
2.5.2.3	Стойка столешницы - 1 шт.;
2.5.2.4	Столешница - 1 шт.;
2.5.2.5	Винт М6 х 45 - 5 шт.;
2.5.2.6	Гайка М6 - 5 шт.;
2.5.2.7	Шайба 6 - 5 шт.;
2.5.2.8	Шуруп 5 X 15 - 8 шт.;
2.5.2.9	Винт М10х25 - 4 шт.;
2.5.2.10	Рукоятка - 1 шт.;
2.5.2.11	Шайба пружинная 10 - 4 шт.;
2.5.2.12	Колесо - 4 шт.;
2.5.3	Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №3, артикул 100166, в составе:
2.5.3.1	Основание столика - 1 шт.;
2.5.3.2	Вертикальная направляющая - 1 шт.;
2.5.3.3	Стойка столешницы - 1 шт.;
2.5.3.4	Столешница - 1 шт.;
2.5.3.5	Винт М6 х 45 - 5 шт.;
2.5.3.6	Гайка М6 - 5 шт.;
2.5.3.7	Шайба 6 - 5 шт.;
2.5.3.8	Винт М10х25 - 4 шт.;
2.5.3.9	Рукоятка - 1 шт.;
2.5.3.10	Шайба пружинная 10 - 4 шт.;

2.5.3.11	Колесо – 4 шт.;
2.5.4	Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №4, артикул 100167, в составе:
2.5.4.1	Основание столика – 1 шт.;
2.5.4.2	Вертикальная направляющая – 1 шт.;
2.5.4.3	Стойка столешницы – 1 шт.;
2.5.4.4	Столешница – 1 шт.;
2.5.4.5	Винт М6 х 45 – 5 шт.;
2.5.4.6	Гайка М6 – 5 шт.;
2.5.4.7	Шайба 6 – 5 шт.;
2.5.4.8	Шуруп 5 X 15 – 8 шт.;
2.5.4.9	Винт М10х25 – 4 шт.;
2.5.4.10	Рукоятка – 1 шт.;
2.5.4.11	Шайба пружинная 10 – 4 шт.;
2.5.4.12	Колесо – 4 шт.;
2.6	Шкаф медицинский, в вариантах исполнения – 1 шт. из перечня (при необходимости):
2.6.1	Шкаф медицинский с двумя дверьми и пятью полками, с регулируемыми опорами, артикул 100219, в составе:
2.6.1.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.6.1.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.6.1.3	Дно, верх – 2 шт.;
2.6.1.4	Полка – 5 шт.;
2.6.1.5	Дверь – 2 шт.;
2.6.1.6	Конфирмат – 16 шт.;
2.6.1.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.6.1.8	Шкант 8х30 – 16 шт.;
2.6.1.9	Петля – 6 шт.;
2.6.1.10	Ручка-скоба – 2 шт.;
2.6.1.11	Шуруп 2А3-13 – 50 шт.;
2.6.1.12	Евровинт V6310 – 24 шт.;
2.6.1.13	Регулируемая опора – 4 шт.;
2.6.1.14	Заглушка конфирмат – 16 шт.;
2.6.1.15	Полкодержатель – 8 шт.;
2.6.1.16	Профиль стыковочный – 1 шт.
2.6.2	Шкаф медицинский двухдверчатый, с двумя вертикальными отделениями, с регулируемыми опорами, артикул 100220, в составе:
2.6.2.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.6.2.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.6.2.3	Дно, верх – 2 шт.;
2.6.2.4	Полка – 6 шт.;
2.6.2.5	Дверь – 2 шт.;
2.6.2.6	Штанга – 1 шт.;
2.6.2.7	Перегородка (стойка) – 1 шт.;
2.6.2.8	Конфирмат – 20 шт.;
2.6.2.9	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.6.2.10	Шкант 8х30 – 20 шт.;
2.6.2.11	Петля – 6 шт.;
2.6.2.12	Ручка-скоба – 2 шт.;
2.6.2.13	Шуруп 2А3-13 – 64 шт.;
2.6.2.14	Евровинт V6310 – 24 шт.;
2.6.2.15	Регулируемая опора – 4 шт.;
2.6.2.16	Заглушка конфирмат – 20 шт.;
2.6.2.17	Полкодержатель – 16 шт.;
2.6.2.18	Штангодержатель – 2 шт.
2.6.3	Шкаф медицинский однодверчатый с открытой секцией, артикул 100233, в составе:
2.6.3.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.6.3.2	Задняя стенка – 1 шт.;

2.6.3.3	Дно, верх – 2 шт.;
2.6.3.4	Полка – 4 шт.;
2.6.3.5	Дверь – 1 шт.;
2.6.3.6	Конфирмат – 12 шт.;
2.6.3.7	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.6.3.8	Шкант 8х30 – 12 шт.;
2.6.3.9	Петля – 2 шт.;
2.6.3.10	Ручка-скоба большая – 1 шт.;
2.6.3.11	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
2.6.3.12	Евровинт V6310 – 8 шт.;
2.6.3.13	Регулируемая опора – 4 шт.;
2.6.3.14	Полкодержатель – 12 шт.;
2.6.3.15	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
2.6.4	Шкаф медицинский одностворчатый с двумя дверцами, артикул 100234, в составе:
2.6.4.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.6.4.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.6.4.3	Дно, верх – 2 шт.;
2.6.4.4	Полка – 2 шт.;
2.6.4.5	Полка стеклянная – 2 шт.;
2.6.4.6	Дверь – 2 шт.;
2.6.4.7	Конфирмат – 12 шт.;
2.6.4.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.6.4.9	Шкант 8х30 – 12 шт.;
2.6.4.10	Петля – 2 шт.;
2.6.4.11	Петля с доводчиком – 2 шт.;
2.6.4.12	Ручка-скоба большая – 1 шт.;
2.6.4.13	Шуруп 2А3-13 – 42 шт.;
2.6.4.14	Евровинт V6310 – 12 шт.;
2.6.4.15	Винт М5х12 – 4 шт.;
2.6.4.16	Регулируемая опора – 4 шт.;
2.6.4.17	Полкодержатель – 4 шт.;
2.6.4.18	Полкодержатель под ст. – 8 шт.;
2.6.4.19	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
2.6.5	Шкаф медицинский двухсекционный, двустворчатый с четырьмя дверцами, артикул 100235, в составе:
2.6.5.1	Боковая стенка – 2 шт.;
2.6.5.2	Задняя стенка – 1 шт.;
2.6.5.3	Дно, верх – 2 шт.;
2.6.5.4	Полка – 2 шт.;
2.6.5.5	Полка стеклянная – 2 шт.;
2.6.5.6	Дверь – 4 шт.;
2.6.5.7	Конфирмат – 12 шт.;
2.6.5.8	Ключ шестигранный – 1 шт.;
2.6.5.9	Шкант 8х30 – 12 шт.;
2.6.5.10	Петля – 4 шт.;
2.6.5.11	Петля с доводчиком – 2 шт.;
2.6.5.12	Ручка-скоба большая – 2 шт.;
2.6.5.13	Шуруп 2А3-13 – 50 шт.;
2.6.5.14	Евровинт V6310 – 24 шт.;
2.6.5.15	Винт М5х12 – 8 шт.;
2.6.5.16	Регулируемая опора – 4 шт.;
2.6.5.17	Полкодержатель – 12 шт.;
2.6.5.18	Полкодержатель под ст. – 8 шт.;
2.6.5.19	Заглушка конфирмат – 12 шт.;
2.7	Руководство по эксплуатации – 1 шт.

3.	Набор мебели медицинской для оснащения физиотерапевтического кабинета №3, в составе:
3.1	Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
3.1.1	Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х300х2000 мм, артикул 100255, в составе:
3.1.1.1	Стойка – 4 шт.;
3.1.1.2	Полка – 4 шт.;
3.1.1.3	Подпятник – 4 шт.;
3.1.1.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
3.1.1.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
3.1.1.6	Шайба 5 – 40 шт.;
3.1.1.7	Гайка М5 – 40 шт.
3.1.2	Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х400х2000 мм, артикул 100256, в составе:
3.1.2.1	Стойка – 4 шт.;
3.1.2.2	Полка – 4 шт.;
3.1.2.3	Подпятник – 4 шт.;
3.1.2.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
3.1.2.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
3.1.2.6	Шайба 5 – 40 шт.;
3.1.2.7	Гайка М5 – 40 шт.
3.1.3	Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000х500х2000 мм, артикул 100257, в составе:
3.1.3.1	Стойка – 4 шт.;
3.1.3.2	Полка – 4 шт.;
3.1.3.3	Подпятник – 4 шт.;
3.1.3.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
3.1.3.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
3.1.3.6	Шайба 5 – 40 шт.;
3.1.3.7	Гайка М5 – 40 шт.
3.1.4	Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х300х2000 мм, артикул 100258, в составе:
3.1.4.1	Стойка – 4 шт.;
3.1.4.2	Полка – 4 шт.;
3.1.4.3	Подпятник – 5 шт.;
3.1.4.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
3.1.4.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
3.1.4.6	Шайба 5 – 40 шт.;
3.1.4.7	Гайка М5 – 40 шт.
3.1.5	Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х400х2000 мм, артикул 100259, в составе:
3.1.5.1	Стойка – 4 шт.;
3.1.5.2	Полка – 4 шт.;
3.1.5.3	Подпятник – 5 шт.;
3.1.5.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
3.1.5.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
3.1.5.6	Шайба 5 – 40 шт.;
3.1.5.7	Гайка М5 – 40 шт.
3.1.6	Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х300х2000 мм, артикул 100260, в составе:
3.1.6.1	Стойка – 4 шт.;
3.1.6.2	Полка – 4 шт.;
3.1.6.3	Подпятник – 5 шт.;
3.1.6.4	Уголок (стяжка) – 16 шт.;
3.1.6.5	Винт М5х12 – 40 шт.;
3.1.6.6	Шайба 5 – 40 шт.;

3.1.6.7	Гайка М5 – 40 шт.
3.2	Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
3.2.1	Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, нишей и дверцей, артикул 100135, в составе:
3.2.1.1	Основание – 1 шт.;
3.2.1.2	Тумба – 1 шт.;
3.2.1.3	Столешница – 1 шт.;
3.2.1.4	Стойка – 1 шт.;
3.2.1.5	Винт М6х45 – 2 шт.;
3.2.1.6	Гайка М6 – 2 шт.;
3.2.1.7	Шайба 6 – 2 шт.;
3.2.1.8	Шуруп 5х35 – 6 шт.;
3.2.1.9	Саморез 4,2х19 – 2 шт.;
3.2.1.10	Колесо мебельное – 4 шт.
3.2.2	Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, выдвижным ящиком и дверцей, артикул 100136, в составе:
3.2.2.1	Основание – 1 шт.;
3.2.2.2	Тумба – 1 шт.;
3.2.2.3	Столешница – 1 шт.;
3.2.2.4	Стойка – 1 шт.;
3.2.2.5	Винт М6х45 – 2 шт.;
3.2.2.6	Гайка М6 – 2 шт.;
3.2.2.7	Шайба 6 – 2 шт.;
3.2.2.8	Шуруп 5х35 – 6 шт.;
3.2.2.9	Саморез 4,2х19 – 2 шт.;
3.2.2.10	Колесо мебельное – 4 шт.
3.2.3	Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, нишей и дверцей №2, артикул 100137, в составе:
3.2.3.1	Основание – 1 шт.;
3.2.3.2	Тумба – 1 шт.;
3.2.3.3	Столешница – 1 шт.;
3.2.3.4	Стойка – 1 шт.;
3.2.3.5	Винт М6х45 – 2 шт.;
3.2.3.6	Гайка М6 – 2 шт.;
3.2.3.7	Шайба 6 – 2 шт.;
3.2.3.8	Шуруп 5х35 – 6 шт.;
3.2.3.9	Саморез 4,2х19 – 2 шт.;
3.2.3.10	Колесо мебельное – 4 шт.
3.2.4	Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, выдвижным ящиком и дверцей №2, артикул 100138, в составе:
3.2.4.1	Основание – 1 шт.;
3.2.4.2	Тумба – 1 шт.;
3.2.4.3	Столешница – 1 шт.;
3.2.4.4	Стойка – 1 шт.;
3.2.4.5	Винт М6х45 – 2 шт.;
3.2.4.6	Гайка М6 – 2 шт.;
3.2.4.7	Шайба 6 – 2 шт.;
3.2.4.8	Шуруп 5х35 – 6 шт.;
3.2.4.9	Саморез 4,2х19 – 2 шт.;
3.2.4.10	Колесо мебельное – 4 шт.
3.3	Кровать стационарная с подголовником, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
3.3.1	Кровать стационарная с подголовником, П-образный профиль, артикул 100108, в составе:
3.3.1.1	Лож с подголовником – 1 шт.;
3.3.1.2	Спинка – 2 шт.;

3.3.1.3	Болт М6х35 – 8 шт.;
3.3.1.4	Гайка М6 – 1 шт.;
3.3.1.5	Шайба 6 – 8 шт.;
3.3.2	Кровать стационарная с подголовником, П-образный профиль, большая, артикул 100109, в составе:
3.3.2.1	Ложе с подголовником – 1 шт.;
3.3.2.2	Спинка – 2 шт.;
3.3.2.3	Болт М6х35 – 8 шт.;
3.3.2.4	Болт мебельный М8х70 – 8 шт.;
3.3.2.5	Гайка М6 – 8 шт.;
3.3.2.6	Гайка М8 – 4 шт.;
3.3.2.7	Шайба 6 – 8 шт.;
3.3.2.8	Шайба 8 – 4 шт.;
3.3.2.9	Уголок левый – 2 шт.;
3.3.2.10	Уголок правый – 2 шт.;
3.3.3	Кровать стационарная с подголовником 1950х700х680 мм, высокая, артикул 100110, в составе:
3.3.3.1	Ложе с подголовником – 1 шт.;
3.3.3.2	Спинка – 2 шт.;
3.3.3.3	Болт М6х35 – 8 шт.;
3.3.3.4	Гайка М6 – 8 шт.;
3.3.3.5	Шайба 6 – 8 шт.;
3.3.4	Кровать стационарная с подголовником 1950х700х840 мм, артикул 100111, в составе:
3.3.4.1	Ложе с подголовником – 1 шт.;
3.3.4.2	Спинка – 2 шт.;
3.3.4.3	Болт М6х35 – 8 шт.;
3.3.4.4	Болт мебельный М8х70 – 8 шт.;
3.3.4.5	Гайка М6 – 8 шт.;
3.3.4.6	Гайка М8 – 4 шт.;
3.3.4.7	Шайба 6 – 8 шт.;
3.3.4.8	Шайба 8 – 4 шт.;
3.3.4.9	Уголок левый – 2 шт.;
3.3.4.10	Уголок правый – 2 шт.;
3.4	Кровать металлическая передвижная с подголовником, П-образный профиль, артикул 100113 – 1 шт., в составе:
3.4.1	Подматрачная рама – 1 шт.;
3.4.2	Ножка – 2 шт.;
3.4.3	Колесо с тормозом – 2 шт.;
3.4.4	Колесо без тормоза – 2 шт.;
3.4.5	Спинка – 2 шт.;
3.4.6	Отбойник ПВХ – 2 шт.;
3.4.7	Болт мебельный М8х70 – 2 шт.;
3.4.8	Шайба 8 пружинная – 2 шт.;
3.4.9	Гайка М8 – 2 шт.;
3.4.10	Винт М10х30 – 2 шт.;
3.4.11	Шайба10 пружинная – 2 шт.;
3.4.12	Болт М10х45 – 2 шт.;
3.4.13	Шайба10 увеличенная – 2 шт.;
3.5	Тумба медицинская под аппаратуру, артикул 100139 - 1 шт. (при необходимости), в составе:
3.5.1	Боковая стенка – 2 шт.;
3.5.2	Задняя стенка – 1 шт.;
3.5.3	Порог – 1 шт.;
3.5.4	Дно, верх – 2 шт.;
3.5.5	Полка – 2 шт.;
3.5.6	Дверь – 2 шт.;

3.5.7	Стяжка- ТЕ 15 – 4 шт.;
3.5.8	Шток – 4 шт.;
3.5.9	Конфирмат – 4 шт.;
3.5.10	Ключ шестигранный – 1 шт.;
3.5.11	Шкант 8х30 – 12 шт.;
3.5.12	Петля – 4 шт.;
3.5.13	Ручка-скоба – 2 шт.;
3.5.14	Шуруп 2А3-13 – 30 шт.;
3.5.15	Подпятник – 4 шт.;
3.5.16	Полкодержатель – 8 шт.;
3.5.17	Заглушка эксцентрик – 4 шт.;
3.5.18	Заглушка конфирмат – 4 шт.;
3.5.19	Профиль стыковочный – 1 шт.;
3.6	Стол медицинский с мойкой, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня (при необходимости):
3.6.1	Стол медицинский с мойкой и тумбой, широкий, правый, артикул 100191
3.6.2	Стол медицинский с мойкой и тумбой, широкий, левый, артикул 100192
3.7	Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения - 1 шт. из перечня:
3.7.1	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100236, в составе:
3.7.1.1	Стенка задняя – 1 шт.;
3.7.1.2	Полка – 2 шт.;
3.7.1.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
3.7.1.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
3.7.1.5	Короб – 3 шт.;
3.7.1.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.1.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.7.1.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.7.1.9	Саморез 4,2х13 – 25 шт.;
3.7.1.10	Саморез 3х17 – 4 шт.;
3.7.1.11	Зашелка магнитная – 2 шт.;
3.7.1.12	Замок мебельный – 1 шт.;
3.7.1.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
3.7.1.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.7.1.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
3.7.1.16	Полкодержатель – 16 шт.;
3.7.1.17	Гайка М5+Шайба 5 – 11 шт.;
3.7.1.18	Винт М5х12 – 16 шт.;
3.7.2	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100237, в составе:
3.7.2.1	Стенка задняя – 1 шт.;
3.7.2.2	Полка – 2 шт.;
3.7.2.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
3.7.2.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
3.7.2.5	Короб – 3 шт.;
3.7.2.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.2.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.7.2.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.7.2.9	Саморез 4,2х13 – 25 шт.;
3.7.2.10	Саморез 3х17 – 4 шт.;
3.7.2.11	Зашелка магнитная – 2 шт.;
3.7.2.12	Замок мебельный – 1 шт.;
3.7.2.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
3.7.2.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);

3.7.2.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
3.7.2.16	Полкодержатель – 16 шт.;
3.7.2.17	Гайка М5+Шайба 5 – 11 шт.;
3.7.2.18	Винт М5х12 – 16 шт.;
3.7.3	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100238, в составе:
3.7.3.1	Стенка задняя – 2 шт.;
3.7.3.2	Полка – 2 шт.;
3.7.3.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
3.7.3.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
3.7.3.5	Короб – 3 шт.;
3.7.3.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.3.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.7.3.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.7.3.9	Саморез 4,2х13 – 30 шт.;
3.7.3.10	Саморез 3х17 – 4 шт.;
3.7.3.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
3.7.3.12	Замок мебельный – 1 шт.;
3.7.3.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
3.7.3.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.7.3.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
3.7.3.16	Полкодержатель – 16 шт.;
3.7.3.17	Гайка М5+Шайба 5 – 12 шт.;
3.7.3.18	Винт М5х12 – 27 шт.;
3.7.4	Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100239, в составе:
3.7.4.1	Стенка задняя – 2 шт.;
3.7.4.2	Полка – 2 шт.;
3.7.4.3	Дверь нижняя – 1 шт.;
3.7.4.4	Дверь стеклянная – 1 шт.;
3.7.4.5	Короб – 3 шт.;
3.7.4.6	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.4.7	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.7.4.8	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.7.4.9	Саморез 4,2х13 – 30 шт.;
3.7.4.10	Саморез 3х17 – 4 шт.;
3.7.4.11	Защелка магнитная – 2 шт.;
3.7.4.12	Замок мебельный – 1 шт.;
3.7.4.13	Втулка ПВХ – 4 шт.;
3.7.4.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.7.4.15	Петля для стекла (2 шт.) + ручка – 1 шт.;
3.7.4.16	Полкодержатель – 16 шт.;
3.7.4.17	Гайка М5+Шайба 5 – 12 шт.;
3.7.4.18	Винт М5х12 – 27 шт.;
3.7.5	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100240, в составе:
3.7.5.1	Стенка задняя – 1 шт.;
3.7.5.2	Полка – 4 шт.;
3.7.5.3	Дверь – 2 шт.;
3.7.5.4	Короб – 3 шт.;
3.7.5.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.5.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.7.5.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
3.7.5.8	Шайба 5 – 26 шт.;

3.7.5.9	Саморез 3x17 – 4 шт.;
3.7.5.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
3.7.5.11	Замок мебельный – 2 шт.;
3.7.5.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
3.7.5.13	Полкодержатель – 16 шт.;
3.7.5.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.7.6	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100241, в составе:
3.7.6.1	Стенка задняя – 1 шт.;
3.7.6.2	Полка – 4 шт.;
3.7.6.3	Дверь – 2 шт.;
3.7.6.4	Короб – 3 шт.;
3.7.6.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.6.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.7.6.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
3.7.6.8	Шайба 5 – 26 шт.;
3.7.6.9	Саморез 3x17 – 4 шт.;
3.7.6.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
3.7.6.11	Замок мебельный – 2 шт.;
3.7.6.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
3.7.6.13	Полкодержатель – 16 шт.;
3.7.6.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.7.7	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100242, в составе:
3.7.7.1	Стенка задняя – 1 шт.;
3.7.7.2	Полка – 4 шт.;
3.7.7.3	Дверь – 2 шт.;
3.7.7.4	Короб – 3 шт.;
3.7.7.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.7.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.7.7.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
3.7.7.8	Шайба 5 – 26 шт.;
3.7.7.9	Саморез 3x17 – 4 шт.;
3.7.7.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
3.7.7.11	Замок мебельный – 2 шт.;
3.7.7.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
3.7.7.13	Полкодержатель – 16 шт.;
3.7.7.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.7.8	Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100243, в составе:
3.7.8.1	Стенка задняя – 1 шт.;
3.7.8.2	Полка – 4 шт.;
3.7.8.3	Дверь – 2 шт.;
3.7.8.4	Короб – 3 шт.;
3.7.8.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.8.6	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.7.8.7	Винт М5х12 – 26 шт.;
3.7.8.8	Шайба 5 – 26 шт.;
3.7.8.9	Саморез 3x17 – 4 шт.;
3.7.8.10	Защелка магнитная – 2 шт.;
3.7.8.11	Замок мебельный – 2 шт.;
3.7.8.12	Втулка ПВХ / Ось мебельная – 4/4 шт.;
3.7.8.13	Полкодержатель – 16 шт.;

3.7.8.14	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.7.9	Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100244, в составе:
3.7.9.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.9.2	Полка – 2 шт.;
3.7.9.3	Дверь – 2 шт.;
3.7.9.4	Короб – 3 шт.;
3.7.9.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.9.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.7.9.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.7.9.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.7.9.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
3.7.9.10	Гайка М5 – 25 шт.;
3.7.9.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
3.7.9.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
3.7.9.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
3.7.9.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.7.9.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.7.9.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.7.9.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.7.9.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.7.9.19	Полкодержатель – 16 шт.;
3.7.10	Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100245, в составе:
3.7.10.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.10.2	Полка – 2 шт.;
3.7.10.3	Дверь – 2 шт.;
3.7.10.4	Короб – 3 шт.;
3.7.10.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.10.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.7.10.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.7.10.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.7.10.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
3.7.10.10	Гайка М5 – 25 шт.;
3.7.10.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
3.7.10.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
3.7.10.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
3.7.10.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.7.10.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.7.10.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.7.10.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.7.10.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.7.10.19	Полкодержатель – 16 шт.;
3.7.11	Шкаф для медикаментов двухстворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100246, в составе:
3.7.11.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.11.2	Полка – 2 шт.;
3.7.11.3	Дверь – 2 шт.;
3.7.11.4	Короб – 3 шт.;
3.7.11.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.11.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.7.11.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.7.11.8	Регулируемая опора – 4 шт.;

3.7.11.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
3.7.11.10	Гайка М5 – 25 шт.;
3.7.11.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
3.7.11.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
3.7.11.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
3.7.11.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.7.11.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.7.11.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.7.11.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.7.11.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.7.11.19	Полкодержатель – 16 шт.;
3.7.12	Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100247, в составе:
3.7.12.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.12.2	Полка – 2 шт.;
3.7.12.3	Дверь – 2 шт.;
3.7.12.4	Короб – 3 шт.;
3.7.12.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.12.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.7.12.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.7.12.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.7.12.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
3.7.12.10	Гайка М5 – 25 шт.;
3.7.12.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
3.7.12.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
3.7.12.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
3.7.12.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.7.12.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.7.12.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.7.12.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.7.12.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.7.12.19	Полкодержатель – 16 шт.;
3.7.13	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100248, в составе:
3.7.13.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.13.2	Полка – 2 шт.;
3.7.13.3	Дверь – 2 шт.;
3.7.13.4	Короб – 3 шт.;
3.7.13.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.13.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.7.13.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.7.13.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.7.13.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
3.7.13.10	Гайка М5 – 25 шт.;
3.7.13.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
3.7.13.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
3.7.13.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
3.7.13.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.7.13.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.7.13.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.7.13.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.7.13.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.7.13.19	Полкодержатель – 16 шт.;

3.7.14	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100249, в составе:
3.7.14.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.14.2	Полка – 2 шт.;
3.7.14.3	Дверь – 2 шт.;
3.7.14.4	Короб – 3 шт.;
3.7.14.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.14.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.7.14.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.7.14.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.7.14.9	Винт М5х12 – 29 шт.;
3.7.14.10	Гайка М5 – 25 шт.;
3.7.14.11	Саморез 4,2х13 – 20 шт.;
3.7.14.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
3.7.14.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
3.7.14.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.7.14.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.7.14.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.7.14.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.7.14.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.7.14.19	Полкодержатель – 16 шт.;
3.7.15	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100250, в составе:
3.7.15.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.15.2	Полка – 2 шт.;
3.7.15.3	Дверь – 2 шт.;
3.7.15.4	Короб – 3 шт.;
3.7.15.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.15.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.7.15.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.7.15.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.7.15.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
3.7.15.10	Гайка М5 – 25 шт.;
3.7.15.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
3.7.15.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
3.7.15.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
3.7.15.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.7.15.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.7.15.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.7.15.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.7.15.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.7.15.19	Полкодержатель – 16 шт.;
3.7.16	Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100251, в составе:
3.7.16.1	Стенка задняя (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.16.2	Полка – 2 шт.;
3.7.16.3	Дверь – 2 шт.;
3.7.16.4	Короб – 3 шт.;
3.7.16.5	Стенка боковая (лев., прав.) – 2 шт.;
3.7.16.6	Дверь стеклянная – 2 шт.;
3.7.16.7	Полка стеклянная – 2 шт.;
3.7.16.8	Регулируемая опора – 4 шт.;
3.7.16.9	Винт М5х12 – 26 шт.;
3.7.16.10	Гайка М5 – 25 шт.;

3.7.16.11	Саморез 4,2х13 – 23 шт.;
3.7.16.12	Саморез 3х17 – 8 шт.;
3.7.16.13	Защелка магнитная – 4 шт.;
3.7.16.14	Замок мебельный – 1 шт.;
3.7.16.15	Втулка ПВХ – 8 шт.;
3.7.16.16	Ручка для стекла – 2 шт.;
3.7.16.17	Петля для стекла – 4 шт.;
3.7.16.18	Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4 шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4 шт., Шайба 5 — 4 шт.) – 1 шт. (при необходимости);
3.7.16.19	Полкодержатель – 16 шт.;
3.8	Руководство по эксплуатации – 1 шт.

2. Показания для применения медицинского изделия.

Кровать стационарная с подголовником предназначена для размещения пациентов при осмотре и проведении процедур в медицинских кабинетах.

Кровать металлическая передвижная с подголовником предназначена для размещения пациентов при осмотре и проведении процедур в медицинских кабинетах и для перемещения между кабинетами.

Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком предназначена для размещения, хранения и перемещения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Тумба медицинская под аппаратуру предназначена для размещения и хранения медицинского и лабораторного оборудования.

Стол медицинский подкатной предназначен для размещения, хранения и перемещения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Стол медицинский предназначен для размещения и хранения медикаментов, расходных материалов, переносного медицинского оборудования, инструментов, применяемых при проведении различных процедур.

Стол медицинский с мойкой предназначен для организации места для санитарной обработки рук медицинского персонала и хранения дезинфицирующих медицинских средств.

Шкаф медицинский предназначен для организации хранения различных изделий медицинского и лабораторного назначения и медикаментов.

Шкаф для медикаментов предназначен для размещения и хранения медикаментов и приспособлений к ним, используемых при проведении процедур.

Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов предназначен для размещения и хранения расходных материалов и инвентаря (например, медицинские массажные валики) применяемых при проведении различных процедур.

Шкаф-стеллаж медицинский предназначен для хранения медицинских расходных материалов.

Тележка для перевозки больных предназначена для перемещения пациентов между кабинетами.

Кушетка медицинская смотровая предназначена для размещения пациентов при осмотре и проведении процедур в медицинских кабинетах.

Кушетка медицинская физиотерапевтическая предназначена для проведения осмотра, физиотерапии (например миостимуляции, электротерапии и др.), акупунктуры. Может проводиться лежа

на спине, животе, полусидя, в зависимости от проводимой процедуры, зоны воздействия и здоровья пациента.

Подставка для ног медицинская предназначена для правильного положения специалиста при проведении процедуры пациентам крупных размеров, поднимаясь на ступеньку. Также для безопасного спуска пациента с заболеваниями ОДА (опорно-двигательного аппарата) и др.

Ширма медицинская стационарная и ширма медицинская передвижная предназначена для организации защищенного от посторонних взглядов пространства при проведении осмотра пациентов в медицинских кабинетах.

3. Противопоказания для применения медицинского изделия.

- Не использовать изделие не по назначению.
- При эксплуатации изделия не допускается превышать допустимые нагрузки.
- Запрещается пользоваться сломанным изделием или изделием после истечения его срока службы.

4. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно данного руководства - побочные действия отсутствуют.

5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения и срок хранения изделия, который указан на упаковке.
- Не проводите по поверхности и не ударяйте их острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.
- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери и полки необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденную стеклодеталь;
- Во избежание опрокидывания мебели запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно;
- При базировании изделия на полу должна быть обеспечена его устойчивость от опрокидывания, перекосов, раскачивания не допускается.

6. Технические характеристики медицинского изделия.

Габаритные размеры, масса изделий и конструктивные особенности соответствуют, приведенным в Приложении 1.

Двери открываются и закрываются плавно, без заедания и перекосов с усилием не более 10Н (1 кгс).

Ящики установлены на роликовых или шариковых направляющих и имеют устройство, предотвращающее их выпадение при выдвигании. Ящики выдвигаются плавно, без перекосов и заедания с усилием не более 10 (1 кгс).

Замки дверей и ящиков неподвижно и прочно закреплены и установлены так, что обеспечивает их легкое отпирание и запирание, а также плотное прилегание дверей и ящиков к корпусу.

Двери без замков имеют устройство, предотвращающее их самопроизвольное открывание.

Набор, в зависимости от модификации, установлен на колеса, либо регулируемые, либо нерегулируемые опоры.

Усилие включения тормоза колес не превышает 150 Н (15 кгс).

Усилие трогания с места не более, указанного в таблице 2.

Изделия при заторможенных колесных опорах с размещенной на них предельной рабочей нагрузкой не смещаются при приложении усилия, указанного в таблице 1.

Таблица 1.

Масса изделия (см. Приложение 1)	Усилие трогания, не более, Н (кгс)	Усилие смещения при заторможенных колёсных опорах, не менее, Н (кгс)
Менее 50 кг	60 (6)	115 (11,5)
50-100 кг	125 (12,5)	235 (23,5)

Усилие перемещения Набора на колесах по горизонтальному бесшовному полу без нагрузки не превышает 50Н (5 кгс).

Набор стоит устойчиво на ровной горизонтальной поверхности пола, при этом зазор между полом и одной из опор не превышает 3 мм.

Элементы Набора выдерживают полуторакратную равномерно распределенную нагрузку. Величины нагрузок:

- на столешницу, полку тумбы из ЛДСП, МДФ не более 10 кг, на тумбу не более 25 кг;
- на столешницу, полку тумбы металлические не более 15 кг;
- на дно ящика из ЛДСП не более 5 кг;
- на дно ящика металлическое не более 10 кг;
- на полку тумбы, дно ящика не более 10 кг;
- на полку шкафа из ЛДСП не более 15 кг;
- на полку шкафа из стекла не более 5 кг;
- на полку шкафа металлическую не более 15 кг;
- на столешницу столов медицинских не более 80 кг;
- на ступеньки подставки не более 85 кг;
- на полку шкафа-стеллажа металлическую не более 100 кг, а на секцию не более 400 кг.
- кушетка должна выдерживать предельную рабочую нагрузку не менее 130 кг;
- тележка должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой не менее 150 кг.

Влажность деталей из древесных материалов $(8 \pm 2) \%$.

Поверхность Набора не имеет трещин, вмятин, следов коррозии, острых кромок, заусенцев, клеевых пятен, подтеков, разнооттеночности и других дефектов, ухудшающих ее товарный вид. Мягкая поверхность изделия не имеет морщин, складок, разрывов материала. Мягкая поверхность изделия не должна иметь морщин, складок, разрывов материала. Покрытия металлических деталей должны быть однотонными, без кратеров, пузырей, включений, отслаивания пленки и должны соответствовать требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

Металлические и неметаллические неорганические покрытия однотонные, без кратеров, пузырей, включений, отслаиваний и соответствуют требованиям ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации I.

Наружные поверхности оборудования устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113, 3%-ным раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 или 1%-ным раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

При изготовлении Набора используются следующие материалы:

Кровать стационарная с подголовником изготавливается из следующих материалов:

- каркас, рамы: прямоугольный стальной профиль по ГОСТ 13663-86 производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Сварная сетка по ГОСТ 23279-85, производства ООО «Ижстройснаб», Россия. Ложе, спинка: стальная труба по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия. Стальной уголок, производства АО «Металлургический завод Балаково». Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-

2008). Регулировка наклона подголовника - механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100108, 100109, 100110, 1001011).

Кровать металлическая передвижная с подголовником, П-образный профиль (100113) изготавливается из следующих материалов: каркас и рамы: прямоугольный стальной профиль по ГОСТ 13663-86 производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Стальной уголок, производства АО «Металлургический завод Балаково». Ложе, спинка: стальная труба по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия. Сварная сетка по ГОСТ 23279-85, производства ООО «Ижстройснаб», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия, диаметр 100. Ступенчатая рейка из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100113).

Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, в зависимости от модификации изготавливается из следующих материалов:

- корпус тумбы и столешница из влагостойкой ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surtesco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. Ручки на двери и ящиках (при наличии): металл, модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED". Китай Поворотный столик: каркас прямоугольный стальной профиль по ГОСТ 13663-86 производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия (100135, 100136);

- корпус тумбы изготовлен из влагостойкой ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surtesco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. Поворотный столик: каркас прямоугольный стальной профиль по ГОСТ 13663-86 производства ООО Выксунский металлургический завод, Россия, столешница МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида Е1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) белого цвета по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия (100137, 100138).

Тумба медицинская под аппаратуру (100139) изготавливается из следующих материалов: корпус, двери, полки: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) белого цвета по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Ручки на дверях: стальные, модель UP, производства «GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED», Китай. Нерегулируемые стальные опоры, производства ООО «ФМС», Россия.

Стол медицинский подкатной, в зависимости от модификации изготавливается из следующих материалов:

- каркас: стальной профиль квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Столешница: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа Р5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Кромочная лента: ПВХ серого цвета толщиной 2 мм, производства

Surteco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия (100164, 100165);

- каркас: стальной профиль квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО «Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Столешница: полиэтилен низкого давления, производства ОАО «Казаньоргсинтез», Россия (ТУ 2243-188-00203335-2009). Телескопическое устройство из пластика и стали, производства ООО «ФМС», Россия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия (100166);

- каркас: стальной профиль квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Столешница: МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейted Вуд Индастри», Россия. Кромочная лента: ПВХ серого цвета толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия (100167).

Стол медицинский изготавливается из следующих материалов: каркас: стальной профиль квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Столешница: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Кромочная лента: ПВХ серого цвета толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия (100168, 100169, 100170, 100171).

Стол медицинский с мойкой изготавливается из:

- каркас, панели, двери, полки: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Цвет фасадов может быть другим: бирюзовый (RAL 6027), голубой (RAL 5024). Столешница: постформинг, производства ООО «Казаньоргсинтез», Россия (ТУ 2243-188-00203335-2009). Мойка из нержавеющей стали, производства Guangdong Zhenpeng Kitchen and Sanitary Ware Co. Ltd, Китай. Резьбовые заклепки стальные, производства ООО «Управляющая компания «Фиксит», Россия (ТУ 1680-001-30391216-2011). Экран: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC» с перфорацией. Накладная петля стальная с доводчиком марки BOYARD, производства ООО «Боярд», Россия. Регулируемые опоры со штырем M10, материал сталь, производства ООО «ФМС», Россия (100191, 100192).

Шкаф медицинский в зависимости от модификации изготавливается из:

- корпус / полки: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг». Дверь / фасад: МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейted Вуд Индастри», Россия. Кромочная лента: ПВХ толщиной 2 мм серого цвета, производства Surteco GmbH, Германия. Петли стальные с доводчиком производства ООО «ФМС», Россия. Ручка на двери модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Регулируемые

опоры со штырем M10, материал сталь и пластик, производства ООО «ФМС», Россия (100219, 100220);

- корпус: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) мм по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг». Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Полки и фасад нижнего отделения: МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Ручки на дверях: модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Петли с доводчиком производства ООО «ФМС», материал сталь, пластик, Россия. Регулируемые опоры со штырем M10, материал сталь и пластик, производства ООО «ФМС», Россия (100233);

- корпус: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг». Окантовка торцевых частей пластиковой (ПВХ) лентой толщиной 2 мм, производства Surteco GmbH, Германия. Нижний фасад: МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Ручки на дверях: модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Петли с доводчиком производства ООО «ФМС», материал сталь, пластик, Россия. Регулируемые опоры со штырем M10, материал сталь и пластик, производства ООО «ФМС», Россия. Верхняя дверь: закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014, производства ООО «Производственная база «Август», Россия (100234);

- корпус и полки: влагостойкая ЛДСП 16 мм (плита древесно-стружечная ламинированная типа P5, облицованная в пленку на основе термоактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида E1) мм серого цвета по ГОСТ 32289-2013, производства ООО «Югорский лесопромышленный холдинг», Россия. Фасады (двери нижние): МДФ 16 мм (плита древесноволокнистая средней плотности марки МДФ, класс эмиссии формальдегида E1, облицованная с двух сторон декоративно-бумажным слоистым пластиком толщиной 1 мм) серого цвета по ГОСТ 32687-2021, производства ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», Россия. Кромочная лента: ПВХ толщиной 2 мм серого цвета, производства Surteco GmbH, Германия. Петли с доводчиком (для дверей из МДФ): материал – сталь, пластик, производства ООО «ФМС», Россия. Двери верхние: закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014, производства ООО «Производственная база «Август», Россия. Алюминиевый профиль, производства ООО «Алюмторг», Россия. Петли с доводчиком (для дверей из стекла): сталь, производства ООО «ФМС», Россия. Ручки на дверях: модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Регулируемые опоры со штырем M10, материал сталь и пластик, производства ООО «ФМС», Россия (100235).

Шкаф для медикаментов, в зависимости от модификации изготавливается из:

- каркас, двери и полки: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех». Верхняя секция и полки: закаленное стекло по ГОСТ 30698-2014, производства ООО «Производственная база «Август», Россия. Ручки на дверях модель UP, производства "GLOBAL WANSON ENTERPRISE LIMITED", Китай. Петли с доводчиком (для стекла): стальные, производства ООО «ФМС», Россия. Металлические пластинчатые полкодержатели, производства ООО «ФМС», Россия. Опоры: из стали и пластика, производства ООО «ФМС», Россия (100236, 100237, 100238, 100239, 100244, 100245, 100246, 100247);

- каркас, двери и полки: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-

порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех». Металлические пластинчатые полкодержатели, производства ООО «ФМС», Россия. Опоры: из стали и пластика, производства ООО «ФМС», Россия (100240, 100241, 100242, 100243, 100248, 100251, 100249, 100250).

Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов изготавливается из следующих материалов: корпус, полки, дверь: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия. Регулируемые опоры из стали и пластика, производства ООО «ФМС», Россия. Врезной стальной мебельный замок с комплектом ключей, производства ООО «ФМС», Россия (100252, 100253, 100254).

Шкаф-стеллаж медицинский изготавливается из следующих материалов: каркас и полки: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия. Опоры: материал пластик и сталь производства ООО «ФМС» (100255, 100256, 100257, 100258, 100259, 100260).

Тележка для перевозки больных изготавливается из следующих материалов: каркас: тонкостенный стальной профиль по ГОСТ 13663-86, производства ООО Выксунский металлургический завод, Россия. Съемная панель: сварная сетка из стали по ГОСТ 23279-85, производства ООО «Иж-стройснаб», Россия. Матрац: эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020), чехол из винилискожи белого цвета, производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия. Механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100262, 100264).

Кушетка медицинская смотровая в зависимости от модификации изготавливается из следующих материалов:

- каркас (усиленный): прямоугольный стальной профиль по ГОСТ 13663-86 производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Ложе: листовая сталь толщиной 0,8 мм по ГОСТ 19904-90, производства «ArcelorMittal Temirtau JSC», Казахстан. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия. Обивка: эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020). Чехол из винилискожи белого цвета, производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай. Регулировка наклона подголовника – механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100265);

- каркас (усиленный): стальной профиль по ГОСТ 8639-82, ГОСТ 30245-2003, производства ООО «Феррум», Россия. Ножки: стальная опора Ø51 с приварным фланцем в сборе, производства ООО «ФМС», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001 45318751-2008). Подголовник и ложе: фанера, производства ООО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат», Россия; эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020); чехол из винилискожи бежевого цвета производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай. Механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100266).

Кушетка медицинская физиотерапевтическая в зависимости от модификации изготавливается из следующих материалов:

- каркас: деревянные бруски, производства ООО «Комсвет», Россия (ТО 5333-01-05029043-2003). Покрытие: лак универсальный TEXTURE 210, производства ООО «Экотехнологии», Россия (ТУ 2313-001-03856078-2016). Ложе и спинка: эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020); чехол из винилискожи белого цвета, производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай. Механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100270);

- каркас: массив бука, производства ООО «Джей Эй Эф Рус», Россия. Покрытие: лак универсальный TEXTURE 210, производства ООО «Экотехнологии», Россия (ТУ 2313-001-03856078-2016). Ложе и спинка: эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020); чехол из винилискожи белого цвета, производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай. Механизм растомат из стали и цинка, производства ООО «ФМС», Россия (100270).

Подставка для ног медицинская изготавливается из следующих материалов: каркас: прямоугоньная стальная труба по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия. Обивка: эластичный пенополиуретан, производства ООО «Эгида», Россия (СТО 50615505, 601-2020). Чехол из винилискожи белого цвета, производства «Haining Rainwing Textile Co., Ltd», Китай." (100283).

Ширма медицинская стационарная изготавливается из следующих материалов: каркас: стальная труба по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия; усиление труба стальная квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО Выксунский металлургический завод, Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Полотно секций: пленка ПВХ, производства ООО «Грасса-С», Россия (ТУ 22.21.30-002-48184618-2022). Заглушки полипропиленовые, производства ООО «ФМС», Россия (100284, 100285, 100286, 100287, 100288, 100289).

Ширма медицинская передвижная изготавливается из следующих материалов: каркас: стальная труба круглого сечения по ГОСТ 10704-91, 10705-80, производства ООО «ПО НВТЗ», Россия; усиление труба стальная квадратного сечения по ГОСТ 13663-86, производства ООО «Выксунский металлургический завод», Россия. Покрытие: экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска белого цвета (RAL 9016), производства ООО Предприятие «Уралинтех», Россия (ТУ 2329-001-45318751-2008). Полотно секций: пленка ПВХ, производства ООО «Грасса-С», Россия (ТУ 22.21.30-002-48184618-2022). Заглушки полипропиленовые, производства ООО «ФМС», Россия. Колеса: стальная вилка с прецизионным радиально-упорным подшипником, ободом из полипропилена и шинкой из серого полиуретана, производства ООО «ФМС», Россия диаметр 75 (100290, 100291, 100292, 100293, 100294, 100295).

7. Комплектность медицинского изделия.

Комплект поставки набора должен соответствовать указанному в Таблице 2 и Приложении 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Набор мебели медицинской (в вариантах исполнения) *	1
2	Руководство по эксплуатации	1

* количество необходимых изделий входящих в состав набора и их модификации (артикулы), определяются по согласованию с заказчиком при заказе.

8. Подготовка к работе медицинского изделия.

Работу проводить только после изучения указаний, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной таре в нормальных климатических условиях (от +10°C до +35°C) не менее 2 ч.

Полученное изделие распакуйте, произведите внешний осмотр. Проверьте целостность покрытий и комплектацию. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод в эксплуатацию без согласования с предприятием-изготовителем не допускается.

Необходимо ознакомиться с устройством изделия и порядком сборки (для сборно-разборных изделий).

Произвести дезинфекцию изделия средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

9. Инструкция по сборке

100191, 100192, 100283 поставляются в собранном виде. Внешний вид приведен в Приложении 3.

Для сборно-разборных:

1. Распаковать изделие и проверить целостность покрытия.
2. Проверить комплектность крепежа (Приложение 2)
3. Осуществить сборку согласно руководству (Приложение 3).
4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей.

10. Техническое обслуживание медицинского изделия.

Изделия имеют простую, надежную конструкцию и не требуют специального обслуживания.

Периодический осмотр включает в себя: осмотр и при необходимости проверка и регулировка резьбовых соединений, петель и покрытий.

В случае ослабления резьбовых соединений и петель, необходимо их затянуть. Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять надежность крепления колес. При необходимости производить затяжку крепежа.

Не рекомендуется длительное использование изделия вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, а также под воздействием прямых солнечных лучей.

В течение всего срока пользования изделием обязательно производите периодическую дезинфекцию, сроки очередной дезинфекции согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

11. Маркировка медицинского изделия.

Маркировка изделий содержит:

- наименование, юридический адрес предприятия-изготовителя;
- адрес места производства;
- товарный знак (логотип) предприятия-изготовителя (при наличии);
- общее наименование изделия;
- наименование элемента набора;
- артикул;
- серийный номер;
- дата производства;
- гарантийный срок;
- срок службы;
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения;
- обозначение настоящих технических условий;
- символ «Предел температуры»;
- символ «Диапазон влажности».

12. Упаковка медицинского изделия.

Упаковка изделий обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

Изделия упакованы в гофрокартон по ГОСТ Р 52901. Дополнительно допускается упаковка изделий в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

Эксплуатационная документация упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена вместе с изделием.

Съемная фурнитура упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена вместе с изделием.

Двери и ящики мебели для предотвращения открывания и выдвижения при транспортировании заперты на замок или при отсутствии замков, закреплены средствами, исключающими повреждение мебели.

13. Транспортирование и хранение медицинского изделия.

Набор транспортируется железнодорожными, водным, автомобильным и воздушным транспортом. Вид транспортного средства - крытый в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования - 5 ОЖ4 по ГОСТ 15150: при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Условия хранения Набора на складах в упаковке предприятия-изготовителя - 1Л по ГОСТ 15150: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 80%. Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред.

14. Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие Набора требованиям ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022 при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации и выполнения требований Руководства по эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным покупателем.

Срок службы 8 лет с момента ввода в эксплуатацию. За предельное состояние принимается такое состояние изделия, при котором дальнейшая эксплуатация не допустима по условиям безопасности или нецелесообразна по технико-экономическим или функциональным показателям.

15. Порядок осуществления утилизации медицинского изделия.

Специальных требований по утилизации оборудования не предъявляется.

Изделия, не поступившие в эксплуатацию, по истечении срока хранения подлежат вторичной переработке, либо подлежат утилизации как отходы класса А в соответствии с требованиями санитарных правил Российской Федерации. Изделия после эксплуатации подлежат утилизации (уничтожению), согласно требованиям СанПиН 2.1.3684, как отходы класса А, а также в соответствии с инструкциями действующими в лечебном-профилактическом учреждении.

16. Сведения о производителе медицинского изделия.

ИП Костров Александр Анатольевич

Юридический адрес: 427105, Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский р-н, с. Люкшудья, ул. Лесная, д. 4

Адрес места производства: 426006, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Четырнадцатая, 135

Тел.: 8-800-700-01-89; E-mail: infoRY-a@fm18.ru.

17. Изделия соответствуют требованиям национальных стандартов:

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»;

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность»;

ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 2 Требования к обращению с животными»

ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5 Исследование на цитотоксичность: методы *in vitro*»;

ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

ГОСТ ISO 10993-12-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12 Приготовление проб и контрольные образцы».

ГОСТ ISO 10993-23-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 23. Исследования раздражающего действия».

Габаритные размеры, масса изделий и конструктивные особенности

1. Кровать стационарная с подголовником, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ± 5 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Кровать стационарная с подголовником, П-образный профиль	100108	1950x800x740	23	С подголовником, без колес, ложе - П-образный профиль
Кровать стационарная с подголовником, П-образный профиль, большая	100109	2030x900x840	36	С подголовником, без колес, ложе - П-образный профиль, Угол наклона подголовника: от 0° до 45°
Кровать стационарная с подголовником 1950x700x680 мм, высокая	100110	1950x700x680	21	Прямоугольные спинки, сварная сетка, ложе - П-образный профиль. Угол наклона подголовника: от 0° до 45°, ступенчатой рейкой
Кровать стационарная с подголовником 1950x700x840 мм	100111	1950x700x840	26	С подголовником, без колес, ложе - П-образный профиль, Угол наклона подголовника: от 0° до 45°

2. Кровать металлическая передвижная с подголовником, П-образный профиль

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ± 5 мм (100ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Кровать металлическая передвижная с подголовником, П-образный профиль	100113	2060x 915x890	45	С подголовником, без колес, ложе - П-образный профиль, Угол наклона подголовника: от 0° до 45°

3. Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ± 4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, нишей и дверцей	100135	580x450x790-1205	25	С верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, с поворотным столиком*, на колесах
Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, выдвижным ящиком и дверцей	100136	580x450x790-1205	25	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, с поворотным столиком*, на колесах

Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, нишей и дверцей №2	100137	580x450x790-1205	25	С верхней открытой нишей и нижним отделением с дверкой, с поворотным столиком* из МДФ, на колесах
Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, выдвижным ящиком и дверцей №2	100138	580x450x790-1205	25	С выдвижным ящиком и нижним отделением с дверкой, с поворотным столиком* из МДФ, на колесах

* Столик поворачивается на 360 градусов

4. Тумба медицинская под аппаратуру

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Тумба медицинская под аппаратуру	100139	700X600X850	35	Двустворчатая, с двумя полками

5. Стол медицинский подкатной, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты	100164	750x400x800-1270	14	с регулировкой высоты, на колесах, облегченный
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №2	100165	750x400x800-1270	15	с регулировкой высоты, на колесах
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №3	100166	750x400x800-1270	15	с регулировкой высоты, на колесах, со столешницей из полиэтилена
Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №4	100167	750x400x800-1270	15	С регулировкой высоты, на колесах, со Столешницей из МДФ

6. Стол медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Стол медицинский 850x750x750 мм	100168	850x750x750	20	Четыре ножки, столешница из ЛДСП
Стол медицинский 1000x750x750 мм	100169	1000x750x750	25	Четыре ножки, столешница из ЛДСП
Стол медицинский 850x750x750 мм №2	100170	850x750x750	20	Четыре ножки, столешница из МДФ
Стол медицинский 1000x750x750 мм №2	100171	1000x750x750	25	Четыре ножки, столешница из МДФ

7. Стол медицинский с мойкой. в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ± 4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Стол медицинский с мойкой и тумбой, широкий, правый	100191	890x600x1200	55	Лабораторный с тумбой, с дверкой и мойкой слева
Стол медицинский с мойкой и тумбой, широкий, левый	100192	890x600x1200	55	Лабораторный с тумбой, с дверкой и мойкой справа

8. Шкаф медицинский. в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ± 4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Шкаф медицинский с двумя дверьми и пятью полками. с регулируемыми опорами	100219	860x460x1950	75	Односекционный, двухстворчатый, с пятью полками, на опорах
Шкаф медицинский двухстворчатый, с двумя вертикальными отделениями, с регулируемыми опорами	100220	860x460x1950	80	Двухстворчатый, с двумя вертикальными отделениями, с полкой и перекладиной в первом отделении, с пятью полками во втором отделении, на опорах
Шкаф медицинский одностворчатый с открытой секцией	100233	450x460x1950	35	Двухсекционный, одностворчатый, с двумя открытыми полками в верхней секции, одной полкой в нижней секции, на опорах
Шкаф медицинский одностворчатый с двумя дверцами	100234	450x460x1950	35	Двухсекционный, одностворчатый, с двумя полками в верхней секции, с одной полкой в нижней секции, на опорах
Шкаф медицинский двухсекционный, двухстворчатый с четырьмя дверцами	100235	860x460x1950	74	Двухсекционный, двухстворчатый, с двумя полками в верхней секции, одной полкой в нижней секции, на опорах

9. Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ± 4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
--------------	---------	--	---------------------	----------------------------

Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией	100236	570x320x1655	32	Двухсекционный, одностворчатый, со стеклянными полками и стеклянной дверкой в верхней секции, металлическими полками и дверкой в нижней секции
Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией №2	100237	570x320x1655	38	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из стекла Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный	100238	600x400x1750	38	Одна открытая секция, вторая закрытая. Количество полок 4 Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из стекла. Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2	100239	600x400x1750	45	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из стекла. Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками	100240	570x320x1655	27	двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками в секциях
Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками №2	100241	570x320x1655	36	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из металла Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный	100242	600x400x1750	31	Две закрытые секции. Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из металла. Нижняя секция дверь и две полки из металла

Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2	100243	600x400x1750	41	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок одностворчатый. Верхняя секция дверь и две полки из металла. Нижняя секция дверь и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией	100244	700x320x1655	38	Двухсекционный, двустворчатый, со стеклянными полками и стеклянными дверками в верхней секции, металлическими полками и дверками в нижней секции
Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией №2	100245	700x320x1655	45	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двустворчатый. Верхняя секция две дверки и две полки из стекла. Нижняя секция две дверки и две полки из металла
Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный	100246	800x400x1750	45	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двустворчатый
Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2	100247	800x400x1750	56	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двустворчатый
Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками	100248	700x320x1655	41	двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками в секциях
Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками №2	100249	700x320x1655	43	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двустворчатый
Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный	100250	800x400x1750	38	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двустворчатый
Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2	100251	800x400x1750	54	Количество полок 4. Количество секций двухсекционный. Количество створок двустворчатый

10. Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями	100252	800x500x1800	60	Двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями, с полкой и перекладной в первом отделении. с тремя полками во втором отделении. вентиляционные отверстия. замками
Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, одностворчатый с двумя полками	100253	500x500x1800	60	Одностворчатый с двумя полками, вентиляционные отверстия, замком
Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями. широкий	100254	800x500x1800	70	Двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями. с полкой и перекладной в первом отделении, с тремя полками во втором отделении, вентиляционные отверстия, замками

11. Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки. 1000x300x2000 мм	100255	1000x300x2000	25	Четыре полки
Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки. 1000x400x2000 мм	100256	1000x400x2000	30	Четыре полки
Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки. 1000x500x2000 мм	100257	1000x500x2000	35	Четыре полки
Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок. 1000x300x2000 мм	100258	1000x300x2000	25	Пять полок
Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок. 1000x400x2000 мм	100259	1000x400x2000	30	Пять полок

Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000х300х2000 мм	100260	1000х500х2000	35	Пять полок
--	--------	---------------	----	------------

12. Тележка для перевозки больных, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Тележка для перевозки больных с подголовником	100262	Размеры каркаса: 1050х625х780 Размеры съемной панели: 2050х595	28	Со съемной панелью, с подголовником в комплекте с матрасом. Угол наклона подголовника: 0-45, ступенчатая, механизм Растомат.
Тележка для перевозки больных со ступенчатым подголовником	100264	Размеры каркаса: 1050х625х780 Размеры съемной панели: 2050х595	28	Со съемной панелью, с подголовником в комплекте с матрасом. Угол наклона подголовника: 0-45, ступенчатая, механизм Растомат.

13. Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Кушетка медицинская смотровая бесступенчатая	100265	1950х650х520	30	Угол наклона подголовника: от 0° до 45°, бесступенчатый
Кушетка медицинская смотровая со ступенчатым подголовником	100266	1970х665х550	30	Угол наклона подголовника: от 0° до 45°, механизмами Растомат

14. Кушетка медицинская физиотерапевтическая, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Кушетка медицинская физиотерапевтическая со ступенчатым подголовником	100270	1960х665х540	30	Угол наклона подголовника: от 0° до 45°, механизмами Растомат
Кушетка медицинская физиотерапевтическая со ступенчатым подголовником, усиленная	100271	1960х665х540	35	Угол наклона подголовника: от 0° до 45°, механизмами Растомат

15. Подставка для ног медицинская

Наименование	Арти-кул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ШхГхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Подставка для ног медицинская двухступенчатая	100283	410х440х360	5	Цельный каркас. двух-ступенчатая

16. Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения:

Наименование	Арти-кул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Ширма медицинская стационарная, 1 секция	100284	790х400х1650	4 – одной секции	Без колес. 1 секция
Ширма медицинская стационарная, 2 секции	100285	790х400х1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес. 2 секции
Ширма медицинская стационарная, 3 секции	100286	790х400х1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес. 3 секции
Ширма медицинская стационарная, 1 секция, на плоских ножках	100287	800х400х1720	4 – одной секции	Без колес. 1 секция.
Ширма медицинская стационарная, 2 секции, на плоских ножках	100288	800х400х1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес. 2 секции.
Ширма медицинская стационарная, 3 секции, на плоских ножках	100289	800х400х1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	Без колес. 3 секции.

17. Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения:

Наименование	Артикул	Габаритные размеры, мм, ±4 мм (ДхШхВ)	Масса, кг, не более	Конструктивные особенности
Ширма медицинская передвижная, 1 секция	100290	790х400х1650	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм). 1 секция
Ширма медицинская передвижная, 2 секции	100291	790х400х1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм). 2 секции
Ширма медицинская передвижная, 3 секции	100292	790х400х1650 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм). 3 секции
Ширма медицинская передвижная, 1 секция, на плоских ножках	100293	800х400х1720	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм). 1 секция.

Ширма медицинская передвижная, 2 секции, на плоских ножках	100294	800х400х1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 2 секции.
Ширма медицинская передвижная, 3 секции, на плоских ножках	100295	800х400х1720 - габариты одной секции	4 – одной секции	На колесах (диаметр колес должен быть не менее 50 мм), 3 секции.

Приложение 2

Комплектность крепежа изделий

1. Кровать стационарная с подголовником, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100108	100109	100110	100111
Лож с подголовником	1	1	1	1
Спинка	2	2	2	2
Болт М6х35	8	8	8	8
Болт М6х16	-	-	-	-
Болт мебельный М8х70	-	8	-	8
Гайка М6	8	8	8	8
Гайка М8	-	4	-	4
Шайба 6	8	8	8	8
Шайба 8	-	4	-	4
Уголок левый	-	2	-	2
Уголок правый	-	2	-	2

2. Кровать металлическая передвижная с подголовником, П-образный профиль:

Наименование	Количество, шт.
	100113
Подматрачная рама	1
Ножка	2
Колесо с тормозом	2
Колесо без тормоза	2
Спинка	2
Отбойник пвх	4
Болт мебельный м8х70	8
Шайба 8 пружинная	8
Гайка М8	8
Винт М10х30	4
Шайба10 пружинная	4
Болт М10х45	4
Шайба10 увеличенная	4

3. Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100135	100136	100137	100138
Основание	1	1	1	1
Тумба	1	1	1	1
Столешница	1	1	1	1
Стойка	1	1	1	1
Винт М6х45	2	2	2	2
Гайка М6	2	2	2	2
Шайба 6	2	2	2	2
Шуруп 5х35	6	6	6	6
Саморез 4,2х19	2	2	2	2
Колесо мебельное	4	4	4	4

4. Тумба медицинская под аппаратуру:

Наименование	Количество, шт.
	100139
Боковая стенка	2
Задняя стенка	1
Порог	1
Дно, верх	2
Полка	2
Дверь	2
Стяжка- ТЕ 15	4
Шток	4
Конфирмат	4
Ключ шестигранный	1
Шкант 8х30	12
Петля	4
Ручка-скоба	2
Шуруп 2А3-13	30
Подпятник	4
Полкодержатель	8
Заглушка эксцентрик	4
Заглушка конфирмат	4
Профиль стыковочный	1

5. Стол медицинский подкатной, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100164	100165	100166	100167
Основание столика	1	1	1	1
Вертикальная направляющая	1	1	1	1
Стойка столешницы	1	1	1	1
Столешница	1	1	1	1
Винт М6 х 45	5	5	5	5
Гайка М6	5	5	5	5
Шайба 6	5	5	5	5
Шуруп 5 X 15	8	8	-	8
Винт М10х25	-	4	4	4
Рукоятка	1	1	1	1
Шайба пружинная 10	-	4	4	4

Колесо	4	4	4	4
--------	---	---	---	---

6. Стол медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100168	100169	100170	100171
Каркас- столешница	1	1	1	1
Ножка	4	4	4	4
Перемычка	1	1	1	1
Гайка М10	4	4	4	4
Шайба пружинная 10	4	4	4	4

7. Шкаф медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.				
	100219	100220	100233	100234	100235
Боковая стенка	2	2	2	2	2
Задняя стенка	1	1	1	1	1
Дно, верх	2	2	2	2	2
Полка	5	6	4	2	2
Полка стеклянная	-	-	-	2	2
Дверь	2	2	1	2	4
Штанга	-	1	-	-	-
Перегородка (стойка)	-	1	-	-	-
Конфирмат	16	20	12	12	12
Ключ шестигранный	1	1	1	1	1
Шкант 8х30	16	20	12	12	12
Петля	6	6	2	2	4
Петля с доводчиком	-	-	-	2	2
Ручка-скоба	2	2	-	-	2
Ручка-скоба большая	-	-	1	1	2
Шуруп 2А3-13	50	64	42	42	50
Евровинт V6310	24	24	8	12	24
Винт М5х12	-	-	-	4	8
Регулируемая опора	4	4	4	4	4
Заглушка конфирмат	16	20	12	12	12
Полкодержатель	8	16	12	4	12
Полкодержатель под ст	-	-	-	8	8
Профиль стыковочный	1	-	-	-	1
Штангодержатель	-	2	-	-	-

8. Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.			
	100236	100237	100238	100239
Стенка задняя (лев., прав.)	1	1	2	2
Полка	2	2	2	2
Дверь нижняя	1	1	1	1
Дверь стеклянная	1 (510х745)	1 (510х745)	1 (540х795)	1 (540х795)

Короб	3	3	3	3
Стенка боковая (лев., прав.)	2	2	2	2
Регулируемая опора	4	4	4	4
Полка стеклянная	2 (270x565)	2 (270x565)	2 (350x595)	2 (350x595)
Саморез 4,2x13	25	25	30	30
Саморез 3x17	4	4	4	4
Защелка магнитная	2	2	2	2
Замок мебельный	1	1	1	1
Втулка ПВХ	4	4	4	4
Ножка металлическая (пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 - 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.)	1*	1*	1*	1*
Петля для стекла (2 шт.) + ручка	1	1	1	1
Полкодержатель	16	16	16	16
Гайка М5+Шайба 5	11	11	12	12
Винт М5х12	16	16	27	27

* комплектуется по согласованию с заказчиком

Наименование	Количество, шт.			
	100240	100241	100242	100243
Стенка задняя	1	1	1	1
Полка	4	4	4	4
Дверь	2	2	2	2
Короб	3	3	3	3
Стенка боковая (лев., прав.)	2	2	2	2
Регулируемая опора	4	4	4	4
Винт М5х12	26	26	26	26
Шайба 5	26	26	26	26
Саморез 3х17	4	4	4	4
Защелка магнитная	2	2	2	2
Замок мебельный	2	2	2	2
Втулка ПВХ / Ось мебельная	4/4	4/4	4/4	4/4
Полкодержатель	16	16	16	16
Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 -4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.)	1*	1*	1*	1*

* комплектуется по согласованию с заказчиком

Наименование	Количество, шт.							
	100244	100245	100246	100247	100248	100249	100250	100251
Стенка задняя (лев., прав.)	2	2	2	2	2	2	2	2
Полка	2	2	2	2	2	2	2	2
Дверь	2	2	2	2	2	2	2	2
Короб	3	3	3	3	3	3	3	3
Стенка боковая (лев., прав.)	2	2	2	2	2	2	2	2
Дверь стеклянная	2 (318x747)	2 (318x747)	2 (367x792)	2 (367x792)	2 (318x747)	2 (318x747)	2 (367x792)	2 (367x792)
Полка стеклянная	2 (272x695)	2 (272x695)	2 (352x795)	2 (352x795)	2 (272x695)	2 (272x695)	2 (352x795)	2 (352x795)
Регулируемая опора	4	4	4	4	4	4	4	4
Винт М5х12	29	29	26	26	29	29	26	26
Гайка М5	25	25	25	25	25	25	25	25

Саморез 4,2x13	20	20	23	23	20	20	23	23
Саморез 3x17	8	8	8	8	8	8	8	8
Защелка магнитная	4	4	4	4	4	4	4	4
Замок мебельный	1	1	1	1	1	1	1	1
Втулка ПВХ	8	8	8	8	8	8	8	8
Ручка для стекла	2	2	2	2	2	2	2	2
Петля для стекла	4	4	4	4	4	4	4	4
Ножка металлическая(пара) с фурнитурой (Болт М10х25 — 4шт., Шайба 10 — 4 шт., Винт М5х12 — 4шт., Шайба 5 — 4шт.)	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*
Полкодержатель	16	16	16	16	16	16	16	16

9. Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.		
	100252	100253	100254
Крышка	1	1	1
Стенка задняя	1	1	1
Полка верхняя	-	1	1
Стенка боковая (лев., прав.)	2	2	2
Короб нижний	1	1	1
Лист нижний	1	1	1
Дверь	1	2	2
Простенок	-	1	1
Полка	2	3	3
Полкодержатель	-	12	12
Штанга	-	1	1
Штангодержатель	-	2	2
Регулируемая опора	4	4	4
Винт М5х12	54	67	67
Шайба 5	54	67	67
Замок мебельный	1	2	2
Втулка ПВХ / Ось мебельная	2/2	4/4	4/4
Саморез 3x17	2	-	-
Защелка магнитная	1	-	-

10. Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.					
	100255	100256	100257	100258	100259	100260
Стойка	4	4	4	5	5	5
Полка	4	4	4	5	5	5
Подпятник	4	4	4	4	4	4
Уголок (стяжка)	16	16	16	16	16	16
Винт М5х12	40	40	40	48	48	48
Шайба 5	40	40	40	48	48	48

Гайка М5	40	40	40	48	48	48
----------	----	----	----	----	----	----

11. Тележка для перевозки больных, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.	
	100262	100264
Боковина	2	2
Стяжка	3	3
Съемная панель	1	1
Болт М10х45	6	6
Шайба 10 пружинная	10	10
Винт М10х25	4	4
Колесо с тормозом, диаметром 125 мм	2	2
Колесо без тормоза, диаметром 125 мм	2	2
Матрац	1	1

12. Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.
	100265
Ложe	1
Стойка левая	1
Стойка правая	1
Стяжка	1
Болт М10х45	6
Шайба	6
Заглушка	4

Наименование	Количество, шт.
	100266
Ложe с каркасом и подголовником	1
Ножка	4
Гайка М10	8
Шайба пружинная 10	4
Заглушка	6

13. Кушетка медицинская физиотерапевтическая, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.	
	100270	100271
Каркас с лежаком и подголовником в сборе	1	1
Ножка	4	4
Поперечная царга	2	2
Болт мебельный М8х70 ГОСТ 7801	16	16
Шайба 8 плоская ГОСТ 11371	16	16
Гайка М8 ГОСТ 5915	16	16
Уголок	8	8
Саморез 5х20	16	16

14. Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.					
	100284	100285	100286	100287	100288	100289

Экран	1	1	1	1	1	1
Стяжка	2	2	2	2	2	2
Стойка одинарная	1	1	1	1	1	1
Стойка двойная	1	1	1	1	1	1
Колодка ПВХ, соединительная	4	4	4	4	4	4
Болт М6х30	4	4	4	4	4	4
Шайба 6 пружинная	4	4	4	4	4	4
Болт М4х20	2	2	2	2	2	2
Шайба 4	2	2	2	2	2	2
Гайка М4	2	2	2	2	2	2
Заглушка МСК302/4	5	5	5	-	-	-


15. Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения:

Наименование	Количество, шт.					
	100290	100291	100292	100293	100294	100295
Экран	1	1	1	1	1	1
Стяжка	2	2	2	2	2	2
Стойка одинарная	1	1	1	1	1	1
Стойка двойная	1	1	1	1	1	1
Колесо	3	3	3	3	3	3
Колодка, соединительная	4	4	4	4	4	4
Болт М6х30	4	4	4	4	4	4
Шайба 6 пружинная	4	4	4	4	4	4
Болт М4х20	2	2	2	2	2	2
Шайба 4	2	2	2	2	2	2
Гайка М4	2	2	2	2	2	2
Заглушка МСК302/4	2	2	2	-	-	-

Инструкция по сборке «Кровать стационарная с подголовником, в вариантах исполнения»


*Кровать стационарная с подголовником, П-образный профиль, артикул 100108;
Кровать стационарная с подголовником 1950x700x680 мм, высокая, артикул 100110*

Собрать при помощи болтов, гаек и шайб ложе со спинками.

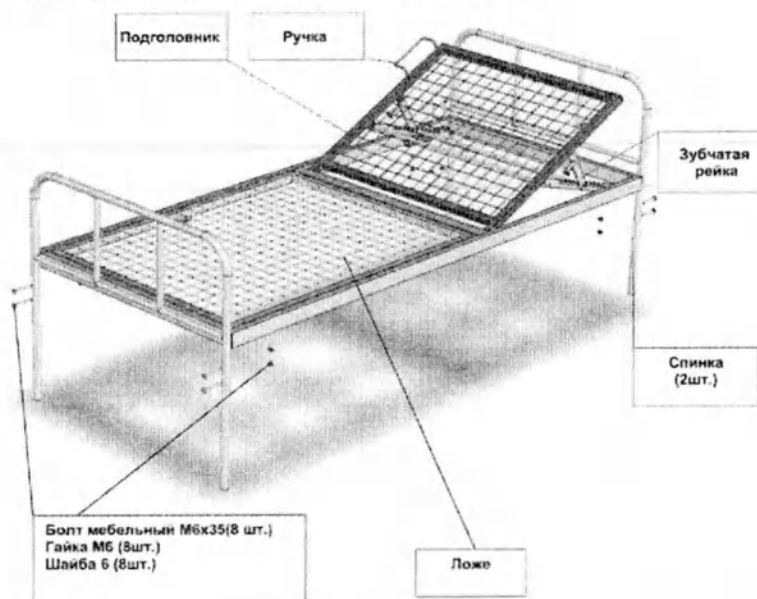

*Кровать стационарная с подголовником, П-образный профиль, большая, артикул 100109;
Кровать стационарная с подголовником 1950x700x840 мм, артикул 100111*


1. При помощи болтов М6х35, гаек М6 и шайб 6 прикрепить уголки сначала к спинке кровати, а затем к раме.
2. Прикрепить ложе к спинкам болтами М8х70, гаек М8 и шайб 8.
3. Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления всех узлов кровати, установите кровать на место.
4. Установите необходимый угол наклона подголовника.
5. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

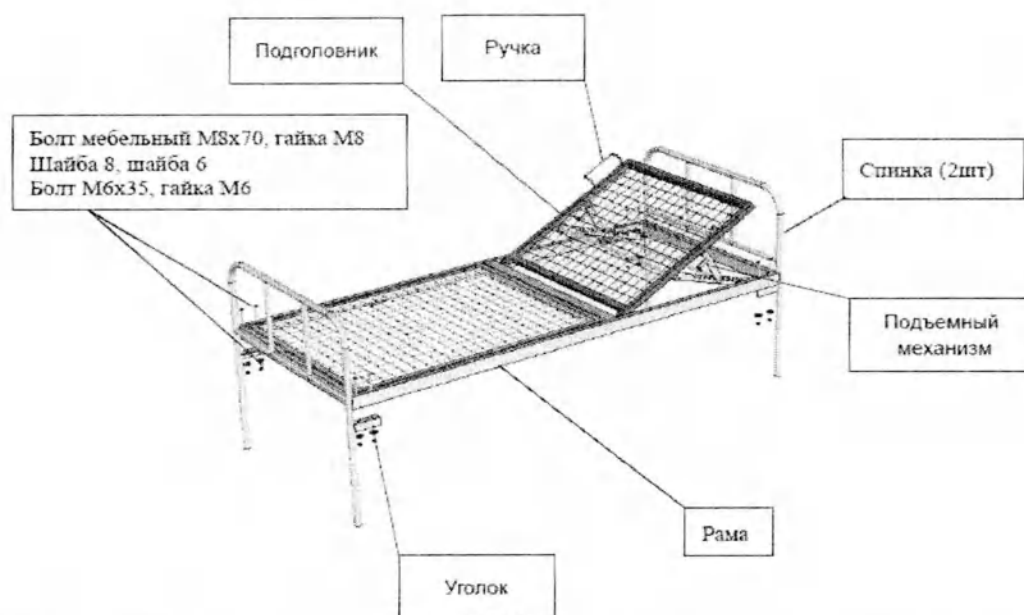

Инструкция по сборке «Кровать металлическая передвижная с подголовником, П-образный профиль»


Кровать металлическая передвижная с подголовником, П-образный профиль, артикул 100113

1. Прикрепить колеса к ножкам при помощи винтов М10х30 и шайб 10 пружинных. Для более надежной фиксации резьбы рекомендуем винты посадить на краску.
2. Прикрепить ножки к раме при помощи болтов М8х70, гаек М8 и шайб 8 пружинных.
3. Вставить обе спинки в каркас.
4. Прикрепить отбойники при помощи болтов М10х45 и шайб 10 увеличенных.

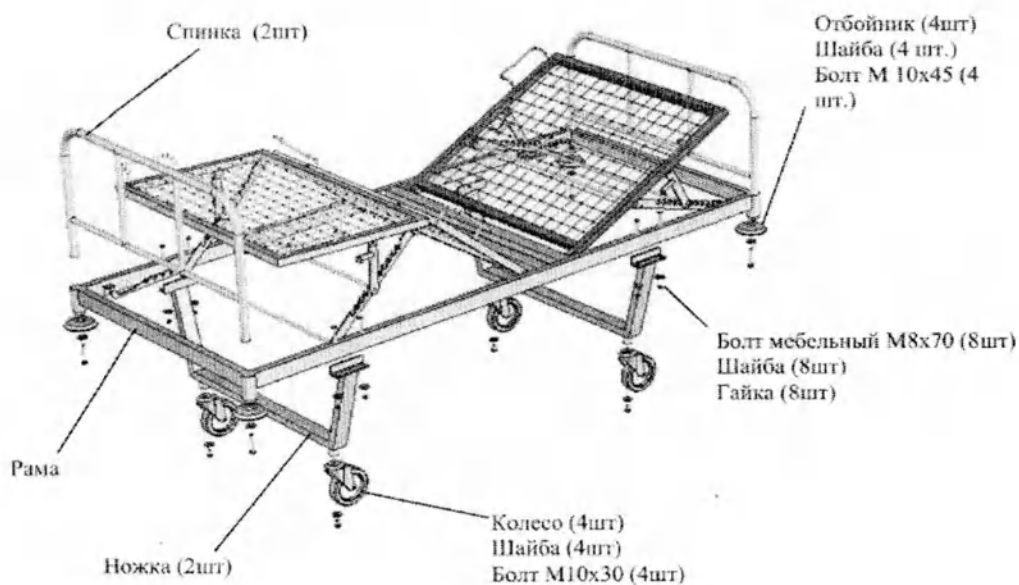


Инструкция по сборке «Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, в вариантах исполнения»

*Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, нишей и дверцей, артикул 100135;
Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, выдвижным ящиком и дверцей, артикул 100136;*

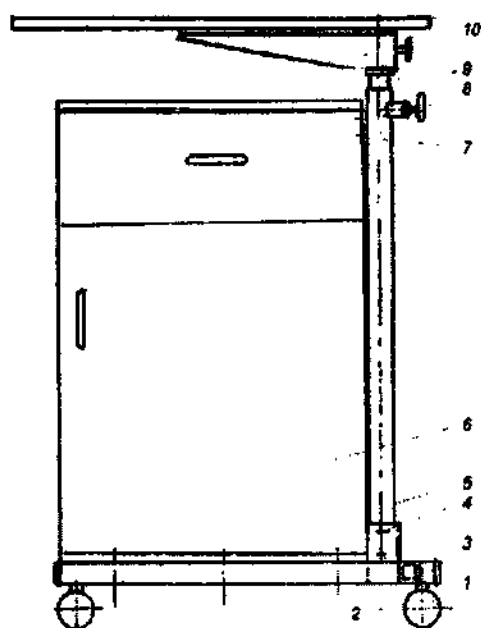

1. Собрать основание (3) и направляющую (5) с помощью винтов М6х45, шайб и гаек М6 (4) без затяжки.
2. Установить тумбу (6) на верхнюю крышку. Поместить сверху ранее собранный узел так, чтобы боковая стенка тумбы плотно прилегала к направляющей, а основание к днищу тумбы. Закрепить тумбу к основанию при помощи шурупов 5х35 (2).
3. Установить колеса (1) в основание.
4. Установить столик (10) на стойку (9) и закрепить ручкой.
5. Установить узел столика на узел направляющей и закрепить ручкой (8). Выровнять положение столика относительно верхней крышки столика и закрепить саморезами 4,2х19 (7).
6. Затянуть винтовое соединение основания и направляющей.

*Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, нишей и дверцей №2, артикул 100137;
Тумба медицинская подкатная с поворотным столиком, выдвижным ящиком и дверцей №2, артикул 100138;*

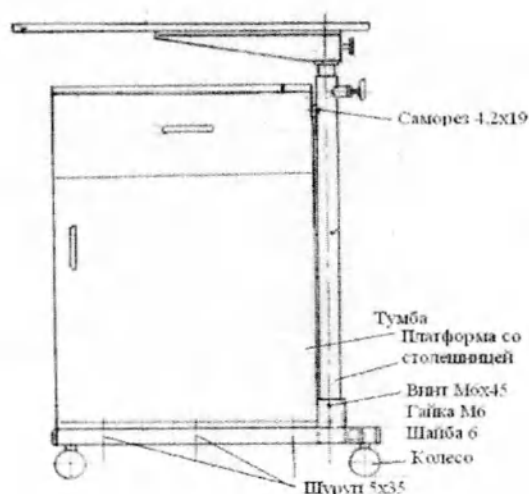


1. Прикрепить основание платформы к стойке платформы при помощи винтов М6х45 и гаек М6. Под гайки подложить шайбы 6.

2. Прикрепить тумбу к платформе при помощи шурупов 5х35 и саморезов 4,2х19.

3. Прикрепить колеса к платформе.


Инструкция по сборке «Тумба медицинская под аппаратуру»

Тумба медицинская под аппаратуру, артикул 100139

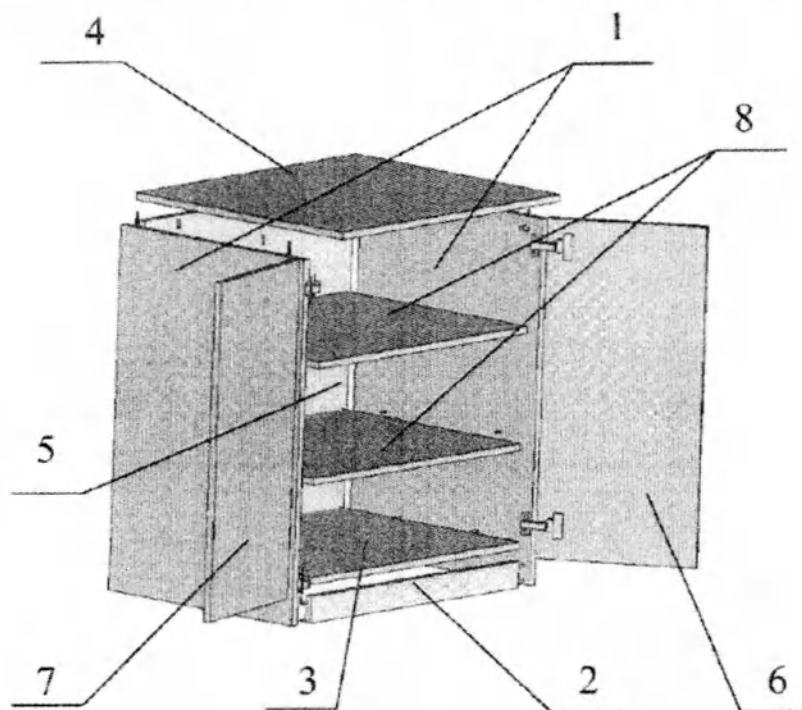


1. Скрепить при помощи стяжек-эксцентров и шкантов крышку (4), при помощи конфирматов и шкантов дно (3) и шкантами - порог (2) с боковыми стенками (1).

2. С помощью шурупов и стыковочного профиля скрепить стенки задние (5) с боковинами (1).

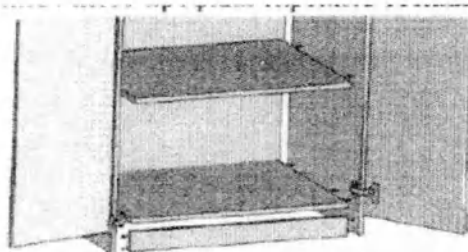

3. Между боковинами (1) при помощи полкодержателей установить полки (8).

4. С помощью петель навесить двери (6, 7), отрегулировать их взаимное положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

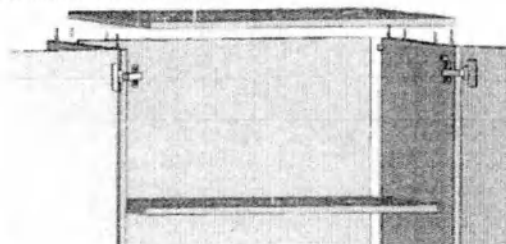

5. Используя винты на двери (6, 7) прикрепить ручки, а под боковины (1) с помощью шурупов установить подпятники.


Инструкция по сборке «Стол медицинский подкатной, в вариантах исполнения»

Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты, артикул 100164;

Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №2, артикул 100165;

Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №3, артикул 100166;

Стол медицинский подкатной с регулировкой высоты №4, артикул 100167;

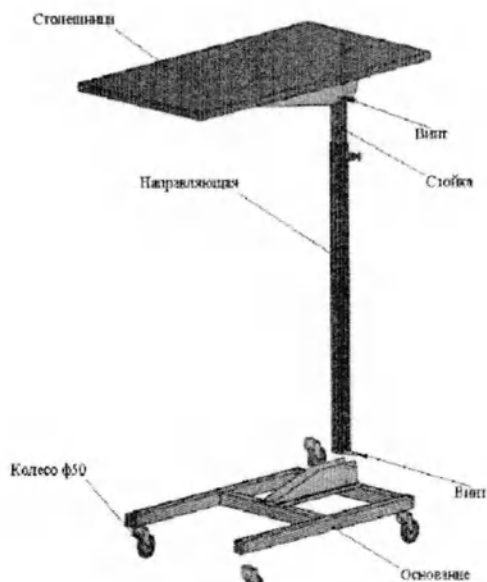

1. Прикрепить вертикальную направляющую к основанию стола при помощи винтов М6, гаек и шайб.

2. Прикрепить столешницу к стойке при помощи винтов М6, гаек и шайб.

3. В направляющую вставить стойку столешницы и зафиксировать на необходимой высоте при помощи рукоятки.

4. Прикрутить колеса к основанию при помощи винтов М10 и шайб пружинных.


Инструкция по сборке «Стол медицинский, в вариантах исполнения»:

Стол медицинский 850x750x750 мм, артикул 100168

Стол медицинский 1000x750x750 мм, артикул 100169

Стол медицинский 850x750x750 мм №2, артикул 100170


Стол медицинский 1000x750x750 мм №2, артикул 100171

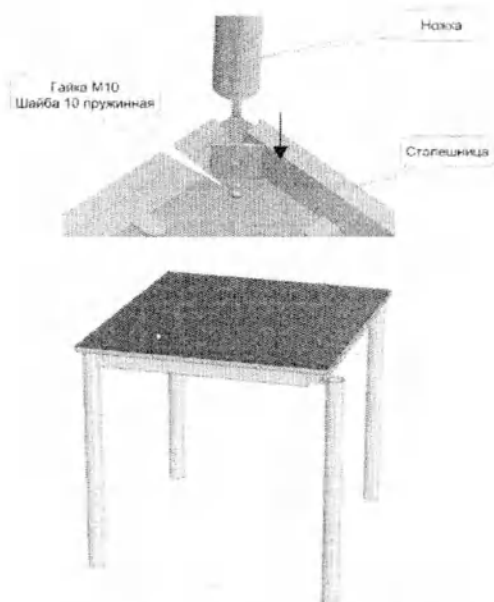


1. Распаковать комплектующие.
2. Установить ножки. Прикрутить их гайками М10 с шайбами 10 пружинными.

Инструкция по сборке «Шкаф медицинский, в вариантах исполнения»:

Шкаф медицинский с двумя дверьми и пятью полками, с регулируемыми опорами, артикул 100219

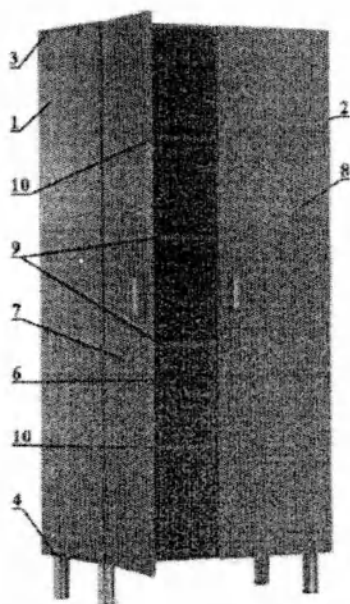


1. При помощи конфирматов и шкантов скрепить боковые стенки (1, 2) с крышкой (3), полками (9), дном (4).
2. С помощью шурупов и стыковочного профиля скрепить стенку заднюю (6) с боковыми стенками (1, 2), крышкой (3) и дном (4).
3. Между боковинами (1, 2) на полкодержателях установить полки (10).
4. Прикрепить петли к дверям (7, 8) при помощи евровинтов.
5. Прикрепить двери (7, 8) к боковым стенкам при помощи евровинтов, отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

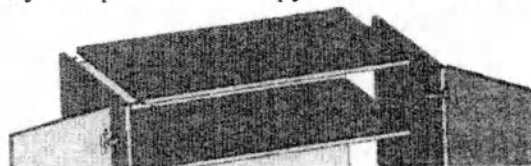

6. Используя винты на двери (7, 8) прикрепить ручки, а на дно с помощью шурупов установить регулируемые опоры.

Шкаф медицинский двустворчатый, с двумя вертикальными отделениями, с регулируемыми опорами, артикул 100220

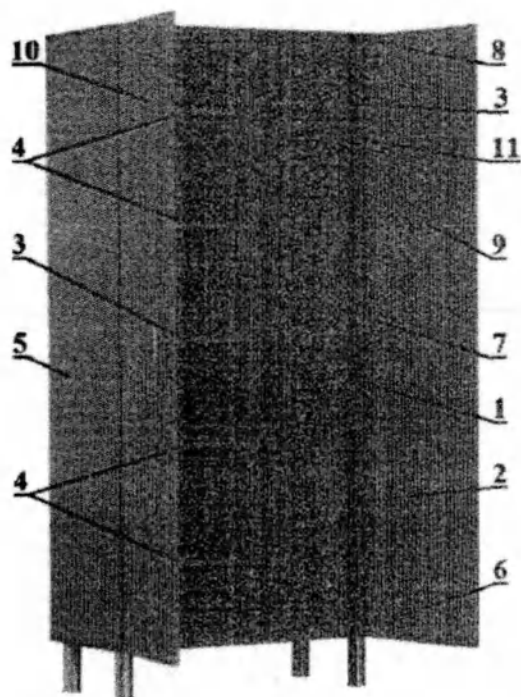


1. Соединить стенки (1, 2, 5) с крышкой (8) и дном (6) с помощью конфирматов и шкантов.
2. Установить при помощи конфирматов и шкантов полки (3).
3. С помощью шурупов прикрепить стенки задние (7) к боковым стенкам (1, 5), крышке (8), дну (6) и стойке (2).
4. Между стойкой (2) и боковой стенкой (5) на полкодержателях установить полки (4), а также прикрепить при помощи шурупов штангодержатели и установить штангу.




5. Прикрепить петли к дверям (9, 10) при помощи евровинтов.
6. Прикрепить двери (9, 10) к боковым стенкам при помощи евровинтов, отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.
7. Используя винты на двери (9, 10) прикрепить ручки, а на дно с помощью шурупов установить регулируемые опоры.


Шкаф медицинский одностворчатый с открытой секцией, артикул 100233

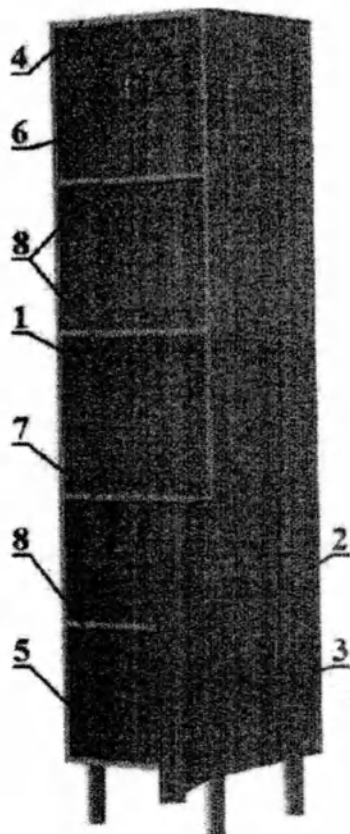

1. При помощи конфирматов и шкантов скрепить боковые стенки (1,2) с крышкой (4), полкой (8), дном (5) и шкантами с порогом (6).
2. С помощью шурупов скрепить стенку заднюю (6) с боковыми стенками (1, 2), крышкой (4) и дном (5).

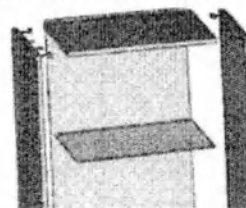


3. Между боковинами (1, 2) на полкодержателях установить полки (9).
4. С помощью петель навесить дверь (3), отрегулировать ее положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

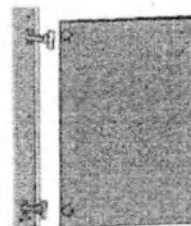


5. Используя винты на дверь (3) прикрепить ручку-скобу, а под боковины (1, 2) с помощью саморезов установить регулируемые опоры.

Шкаф медицинский одностворчатый с двумя дверцами, артикул 100234

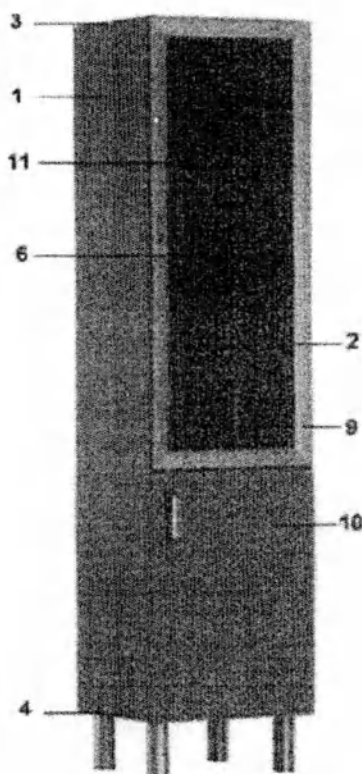


1. При помощи конфирматов и шкантов скрепить боковые стенки (1, 2) с крышкой (3), полкой (7), дном (4).

2. С помощью шурупов скрепить стенку заднюю (6) с боковыми стенками (1, 2), крышкой (3) и дном (4).

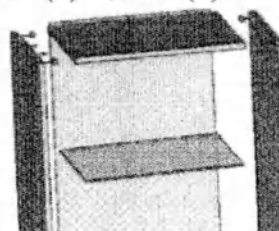


3. Между боковинами (1, 2) на полкодержателях установить полку (8) и стеклянные полки (11).

4. С помощью петель навесить дверь (10) и стеклянную дверь (9), отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

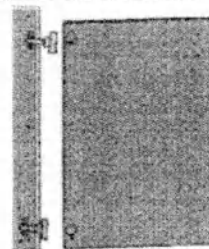


5. Используя винты на двери (9, 10) прикрепить ручки, а под боковины (1, 2) с помощью саморезов установить регулируемые опоры

Шкаф медицинский двухсекционный, двустворчатый с четырьмя дверцами, артикул 100235

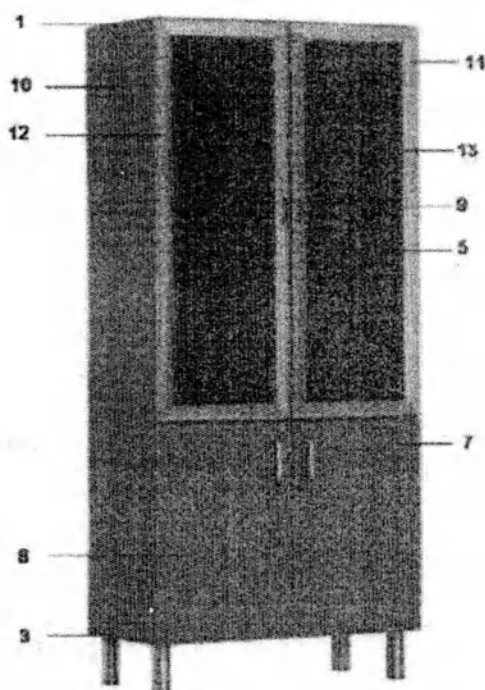

1. Скрепить при помощи стяжек-эксцентров и шкантов боковые стенки (9, 10) с крышкой (1), с полкой (2), дном (3).

2. С помощью саморезов или гвоздей скрепить стенку заднюю (5) с боковыми стенками (9, 10), крышкой (1) и дном (3).

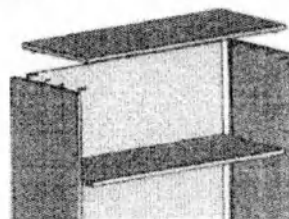

3. Между боковинами (9, 10) на полкодержателях установить полку (6) и стеклянные полки (13).

4. С помощью петель навесить двери (7, 8) и стеклянные двери (11, 12), отрегулировать их положение, используя для этого предусмотренные конструкцией винты на петлях.

5. Используя винты на двери (7, 8, 11, 12) прикрепить ручки, а под боковины (9, 10) с помощью саморезов установить регулируемые опоры.


Инструкция по сборке «Шкаф для медикаментов, в вариантах исполнения»:

Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100236:



Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100237:

Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100238:

*Шкаф для медикаментов одностворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул
100239*

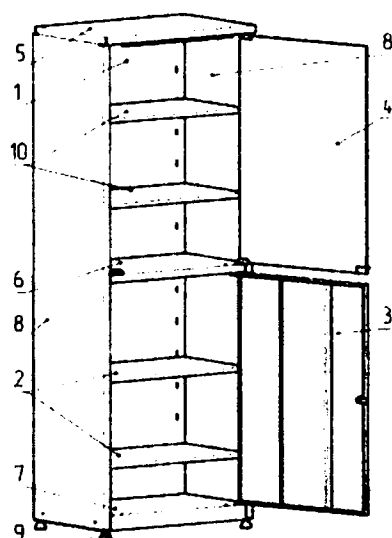

1. Соединить стенки задние (1) при помощи винтов и гаек М5. Работы производить на ровной и чистой поверхности.

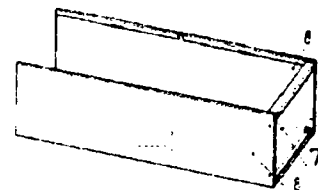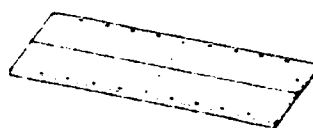

2. Вставить боковые стенки (8) в короб нижний (7) и закрепить при помощи саморезов 4,2x13.


3. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2x13.

4. Прикрепить короб верхний (5) при помощи винтов и гаек М5.

5. Прикрепить короб средний (6) - завести в пазы на боковых стенках (8) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.



6. Прикрепить регулируемые опоры (9) к коробу нижнему (7).

Если шкаф оснащен ножками металлическими (16) прикрепить их к коробу нижнему (7) при помощи болтов М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (9).

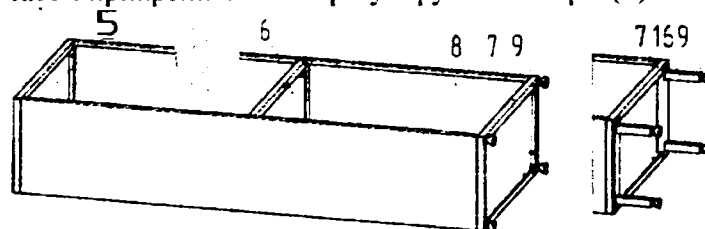

8. Собрать дверь металлическую (3), вставить замок мебельный (14).

9. Собрать дверь стеклянную (4): прикрепить ручку и петли (17).

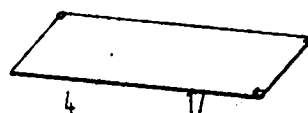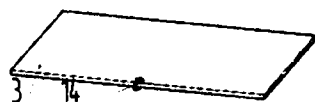


10. Установить защелки магнитные (13) при помощи саморезов 3x17.

11. Установить втулки (15) в места крепления дверей.

12. Установить двери (3). Для этого вставить винт М5 через отверстие в двери во втулку, а затем подогнуть фиксатор на двери.

13. Установить двери (4).

14. Установить полки (2, 10) на полкодержатели (18).

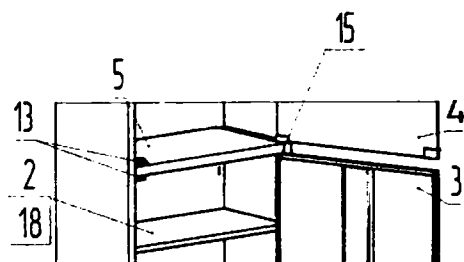


Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100240;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100241;


Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100242;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, одностворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100243

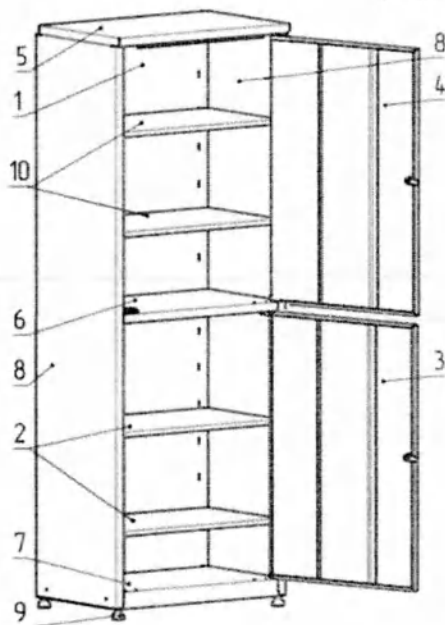

1. Соединить боковые стенки (8) со стенкой задней (1). Для этого нужно завести боковые стенки сверху в отгибы в задней стенке. Зафиксировать их винтами.
2. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2x13.
3. Прикрепить короб средний (6) - завести в пазы на боковых стенках (8) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.
4. Установить втулки ПВХ в отверстия в коробе среднем сверху и снизу и в коробе верхнем.
5. Установить оси в короб средний и в верхнее отверстие двери. Поставить верхнюю дверь (4).
6. Прикрепить короб верхний (5) при помощи винтов и гаек М5.
7. Снизу установить короб нижний (7), предварительно вставив в него втулку ПВХ, в верхнее отверстие двери — ось.
8. Установить нижнюю дверь, а короб нижний скрепить винтами.

9. Закрутить в короб нижний регулируемые опоры (9) и выставить ими такое положение шкафа, при котором двери открываются и закрываются свободно без заедания. Если шкаф оснащен ножками металлическими (16) прикрепить их к коробу нижнему (7) при помощи болтов М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (9).

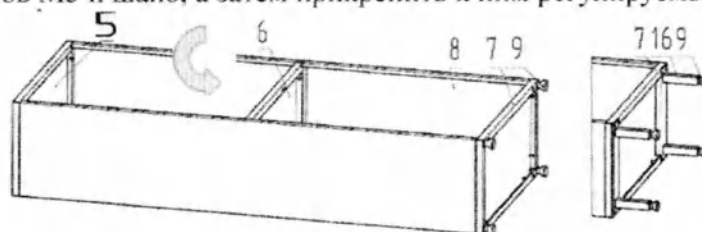


8. Собрать дверь металлическую (3, 4), вставить замок мебельный (14).



10. Установить защелки магнитные (13) при помощи саморезов 3x17.

14. Установить полки (2, 10) на полкодержатели (18).

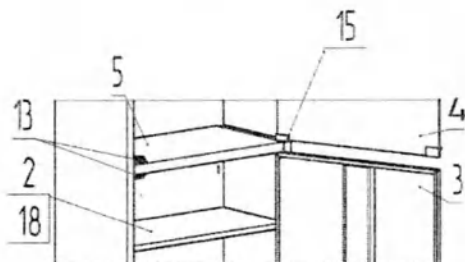


Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, артикул 100244;



Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией №2, артикул 100245;

Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный, артикул 100246;

Шкаф для медикаментов двустворчатый со стеклянной верхней секцией, углубленный №2, артикул 100247

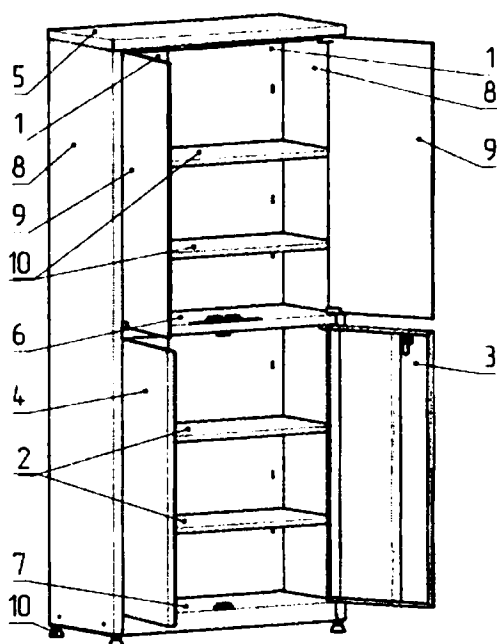

1. Соединить стенки задние (1) при помощи винтов и гаек М5. Работы производить на ровной и чистой поверхности.

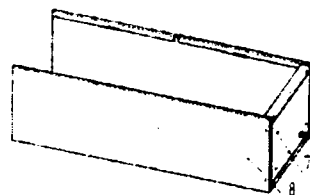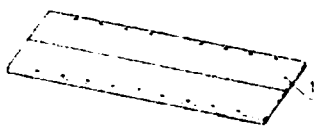

2. Вставить боковые стенки (8) в короб нижний (7) и закрепить при помощи саморезов 4,2x13.


3. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2x13.

4. Прикрепить короб верхний (5) при помощи винтов и гаек М5.

5. Прикрепить короб средний (6) - завести в пазы на боковых стенках (8) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.


6. Прикрепить регулируемые опоры (11) к коробу нижнему (7).

7. Если шкаф оснащен ножками металлическими (21) прикрепить их к коробу нижнему (7) при помощи болтов М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (11).

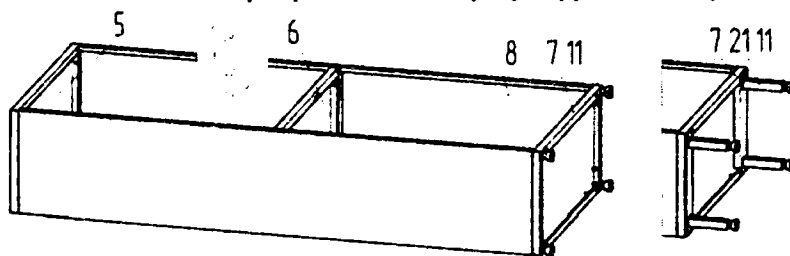

8. Собрать двери металлические (3): вставить замок мебельный (15).

9. Собрать двери стеклянные (9): прикрепить ручку (18) и нижние петли (19).

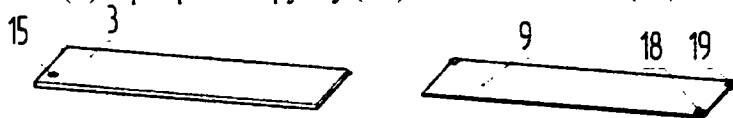


10. Установить защелки магнитные (15) при помощи саморезов 3x17.

11. Установить втулки (16) в места крепления дверей.

12. Установить двери (3, 4). Для этого вставить винт М5 через отверстие в двери во втулку, а затем подогнуть фиксатор на двери.

13. Установить двери (9). Для этого установить дверь с нижней петлей во втулку, затем установить верхнюю петлю и зафиксировать.

14. Установить полки (2) и (10) на полкодержатели (20).

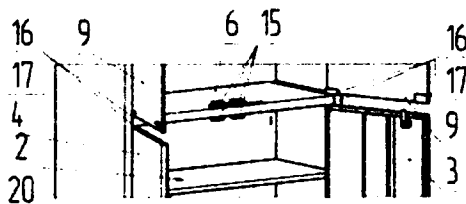


Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, артикул 100248;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками №2, артикул 100249;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный, артикул 100250;

Шкаф для медикаментов двухсекционный, двустворчатый, с металлическими полками и дверками, углубленный №2, артикул 100251

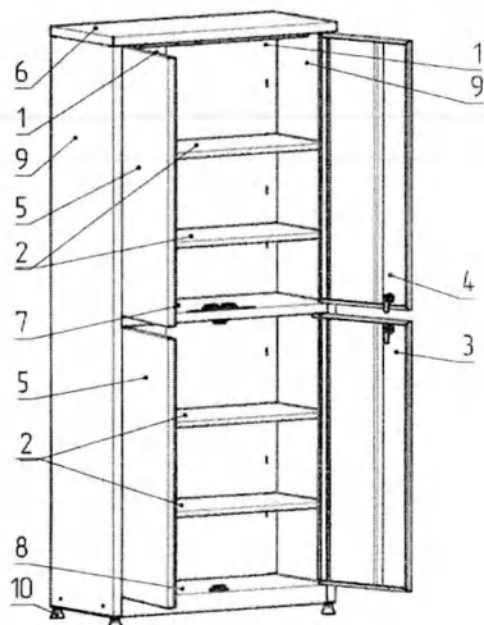

1. Соединить стенки задние (1) при помощи винтов и гаек М5. Работы производить на ровной и чистой поверхности.



2. Вставить боковые стенки (9) в короб нижний (8) и закрепить при помощи саморезов 4,2x13.

3. Вставить стенку заднюю (1) между боковыми и дном. Прикрепить при помощи саморезов 4,2x13.


4. Прикрепить короб верхний (6) при помощи винтов и гаек М5.

5. Прикрепить короб средний (7) - завести в пазы на боковых стенках (9) в направлении, показанном на рисунке и закрепить при помощи винтов и гаек М5 к боковым и задней стенкам.

6. Прикрепить регулируемые опоры (10) к корпусу нижнему (8).

Если шкаф оснащен ножками металлическими (18) прикрепить их к корпусу нижнему (8) при помощи болтов М10, винтов М5 и шайб, а затем прикрепить к ним регулируемые опоры (10).

7. Собрать двери металлические (3, 4): вставить замок мебельный (14).

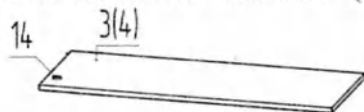


8. Установить защелки магнитные (13) при помощи саморезов 3x17.

10. Установить втулки (14) в места крепления дверей.


11. Установить двери (3, 4, 5). Для этого вставить винт М5 через отверстие в двери во втулку, а затем подогнуть фиксатор на двери.

12. Установить полки (2) на полкодержатели (17).

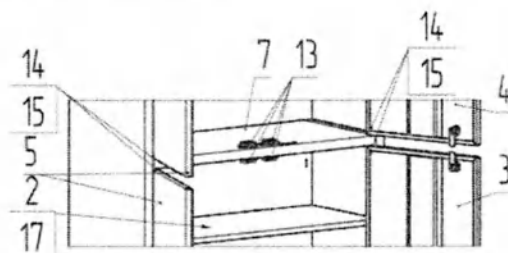


Инструкция по сборке «Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, в вариантах исполнения»:


Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями, артикул: 100252

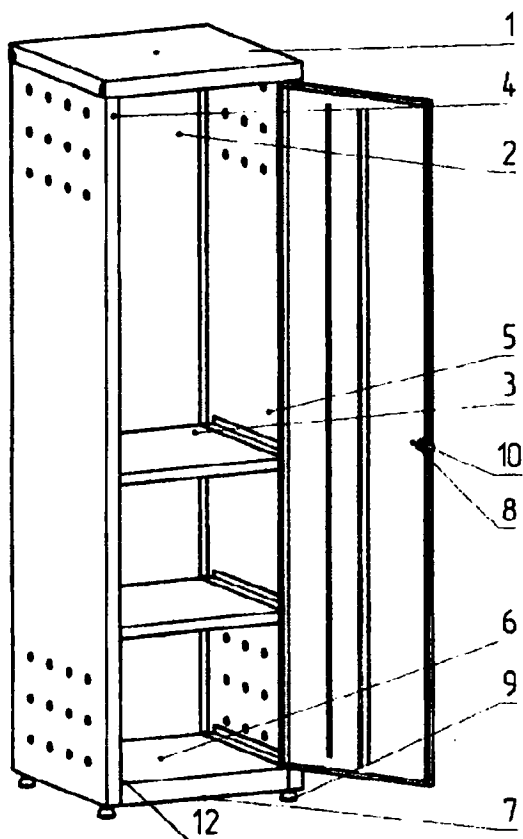

1. Соединить боковую стенку (4) с коробом нижним (6) и полками средними (3) при помощи винтов М5 и шайб.

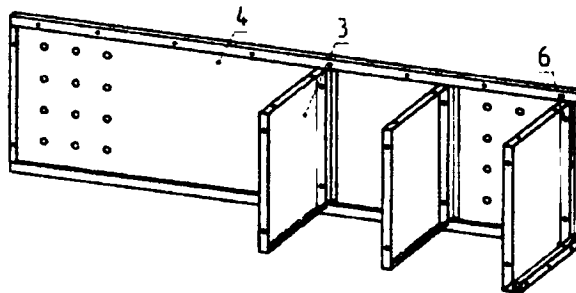

2. Соединить боковую стенку (5) с коробом нижним (6) и полками средними (3) при помощи винтов М5 и шайб.

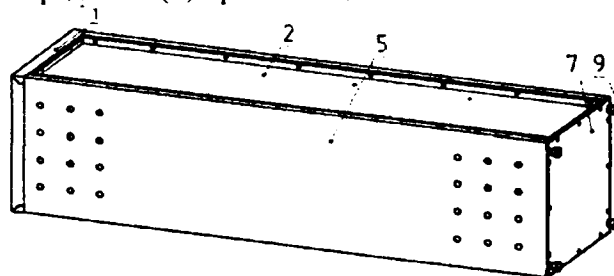

3. Прикрепить крышку (1) при помощи винтов М5 и шайб.

4. Прикрепить стенку заднюю (2) и лист нижний (7) к боковым стенкам и коробу нижнему при помощи винтов М5 и шайб. Прикрепить регулируемые опоры (9).

5. Прикрепить защелку магнитную (12) к коробу нижнему (6) саморезами.

6. Установить втулки (11) в места крепления двери.


7. Установить оси в короб нижний и в верхнее отверстие двери. Поставить дверь.

8. При помощи регулируемых опор выставить такое положение шкафа, при котором дверь открывается и закрывается свободно без заедания.


9. Навесить комплект приспособлений при наличии на верхний край усилителя двери.

Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, одностворчатый с двумя полками,
артикул: 100253,


Шкаф медицинский для инвентаря и расходных материалов, двухстворчатый с двумя вертикальными отделениями, широкий, артикул: 100254

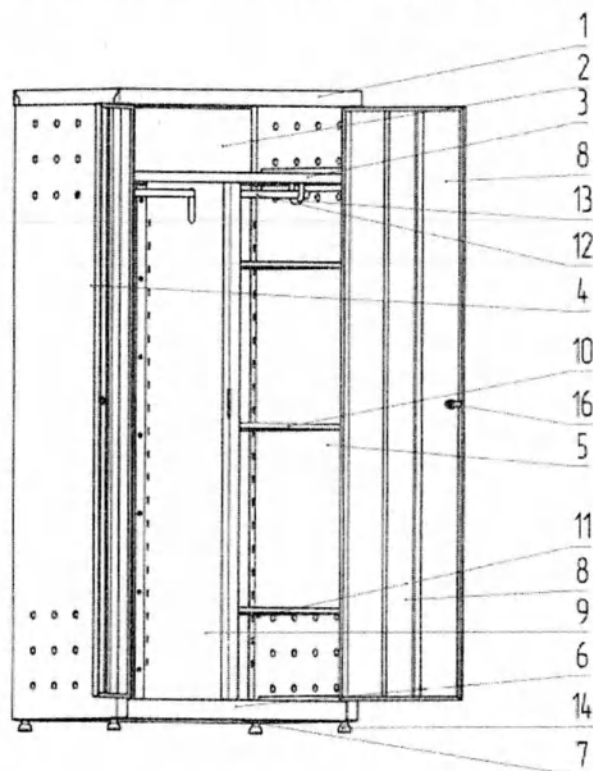

1. Соединить боковую стенку (4) с коробом нижним (6) и полкой верхней (3) при помощи винтов М5 и шайб.
2. Установить между коробом нижним (6) и полкой верхней (3) простенок (9). Закрепить винтами М5 и шайбами.

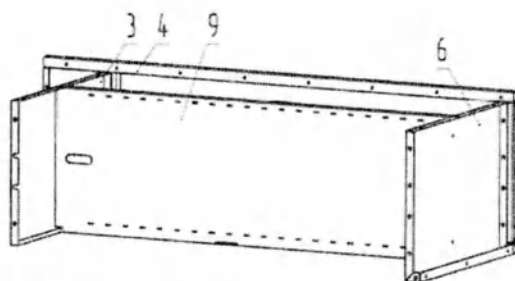

3. Соединить боковую стенку (5) с коробом нижним (6) и полкой верхней (3) при помощи винтов М5 и шайб.

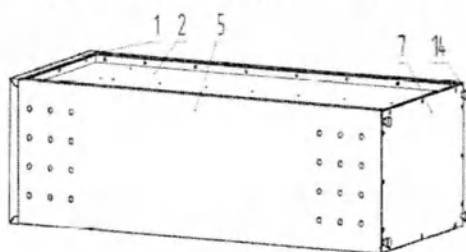

4. Прикрепить крышку (1) при помощи винтов М5 и шайб.

5. Прикрепить стенку заднюю (2) и лист нижний (7) к боковым стенкам, простенку и коробу нижнему при помощи винтов М5 и шайб. Прикрепить регулируемые опоры (14).
6. Установить штангодержатели (13) на боковые стенки. На штангодержатели установить штангу (12).
7. Установить втулки (15) в места крепления двери.
8. Установить оси в короб нижний и в верхнее отверстие двери. Поставить двери.
9. При помощи регулируемых опор выставить такое положение шкафа, при котором дверь открывается и закрывается свободно без заедания.

Инструкция по сборке «Шкаф-стеллаж медицинский, в вариантах исполнения»:

Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x300x2000 мм, артикул 100255;

Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x400x2000 мм, артикул 100256;



Шкаф-стеллаж медицинский, четыре полки, 1000x500x2000 мм, артикул 100257;

Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x300x2000 мм, артикул 100258;

Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x400x2000 мм, артикул 100259;

Шкаф-стеллаж медицинский, пять полок, 1000x300x2000 мм, артикул 100260.

1. Положить стойки на горизонтальную поверхность, установить пластиковые подпятники.
2. Соединить стойки с полками с помощью винтов, шайб и гаек. Верхнюю и нижнюю полки соединять через стяжки (уголки).

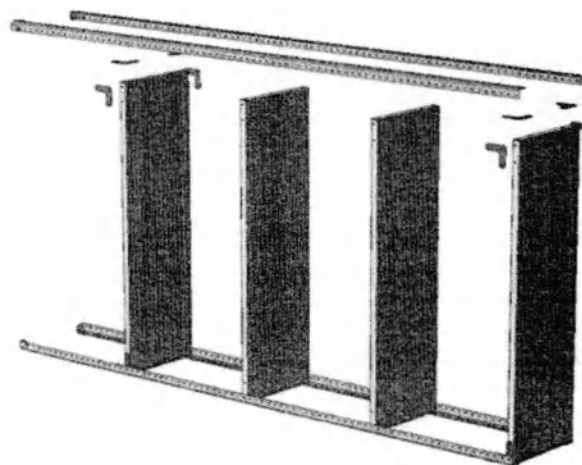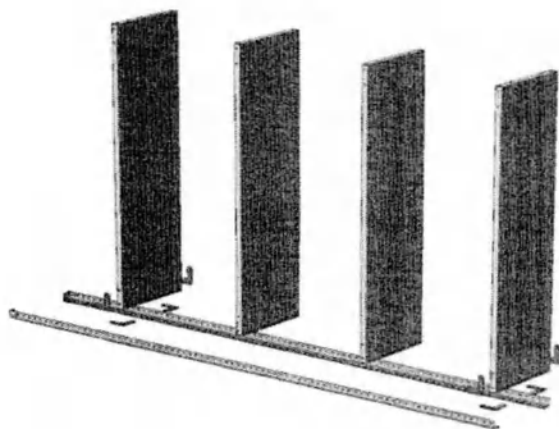


Инструкция по сборке «Тележка для перевозки больных, в вариантах исполнения»

Тележка для перевозки больных с подголовником, артикул 100262;

Тележка для перевозки больных со ступенчатым подголовником, артикул 100263


1. Собрать каркас тележки из боковин и стяжек с использованием болтов М10х45 и шайб 10 пружинных.
2. Прикрепить колеса к каркасу при помощи винтов М10х25 и шайб 10 пружинных.
В случае затруднения установки винтов в колеса необходимо открутить ось вращения ролика колеса и удалить его. После крепления вилки колеса установить ролик в обратном порядке. Для более надежной фиксации резьбы рекомендуем винты посадить на краску.
3. Вставить съемную панель в каркас.

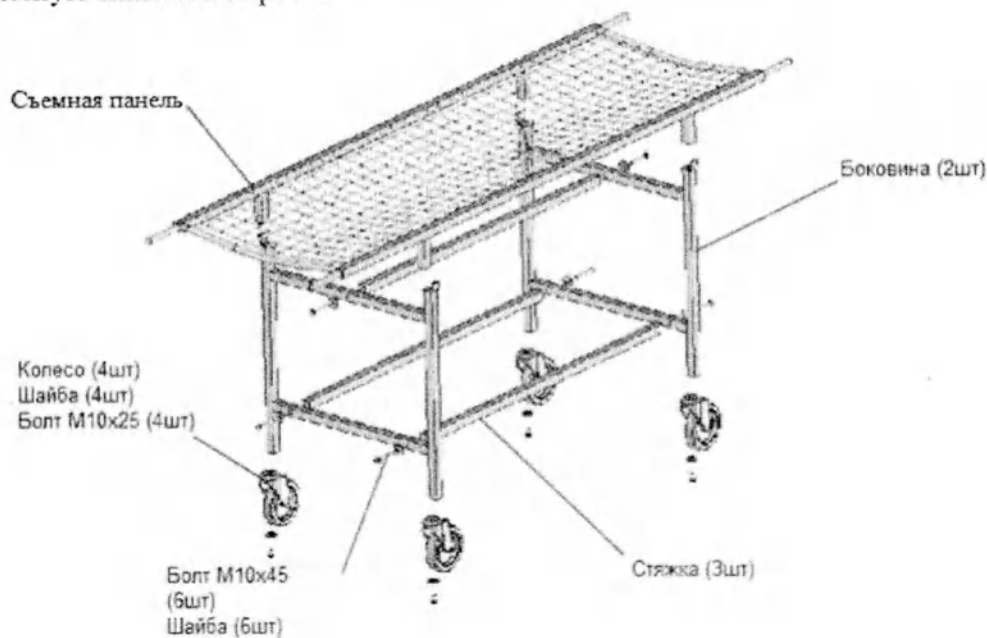

Инструкция по сборке «Кушетка медицинская смотровая, в вариантах исполнения»:


Кушетка медицинская смотровая бесступенчатая, артикул 100265

1. Соединить болтами раму и стойки, вставив упор в ушко на левой стойке. При этом ушко должно быть повернуто в сторону стойки.
2. Прикрепить болтами стяжку к стойкам.

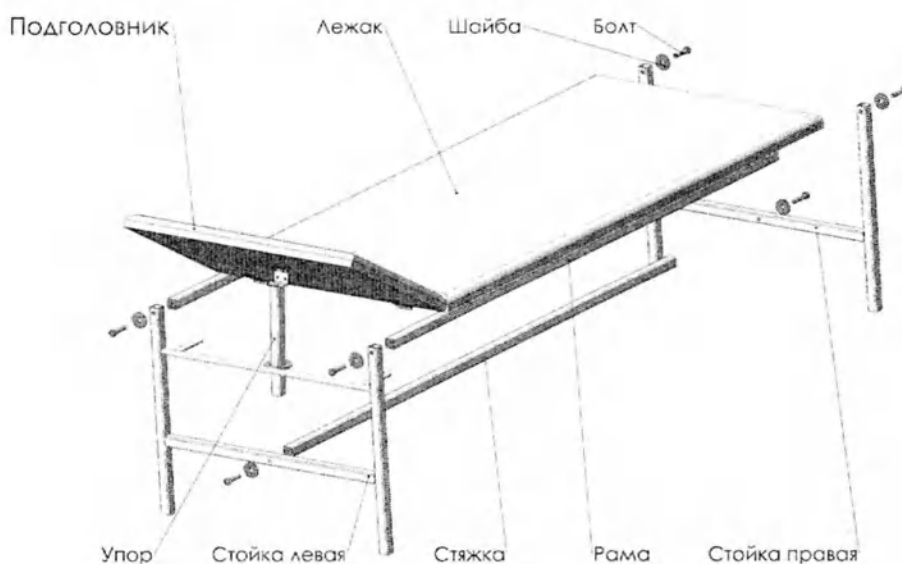

Кушетка медицинская смотровая со ступенчатым подголовником, артикул 100266

1. Прикрепить ножки к каркасу при помощи пары гаек М10 застопорив их пружинной шайбой 10.
2. Вставить в ножки заглушки.

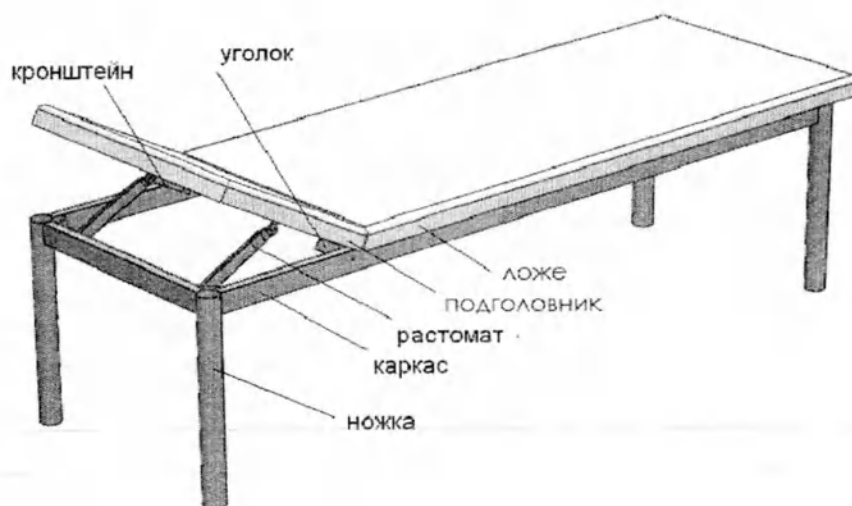


Инструкция по сборке «Кушетка медицинская физиотерапевтическая, в вариантах исполнения»:

Кушетка медицинская физиотерапевтическая со ступенчатым подголовником, артикул 100270


Кушетка медицинская физиотерапевтическая со ступенчатым подголовником, усиленная, артикул 100271

1. Собрать ножки попарно с поперечной царгой при помощи мебельных болтов М8х70 и гаек М8. Под гайку подложить шайбу 8.
2. Ножки в сборе с царгой прикрепить к каркасу при помощи мебельных болтов М8х70 и гаек М8. Под гайку подложить шайбу 8.
3. Затянуть резьбовые соединения гаечным ключом.
4. Установить уголки между ножкой и каркасом, ножкой и царгой при помощи самореза 5х20.

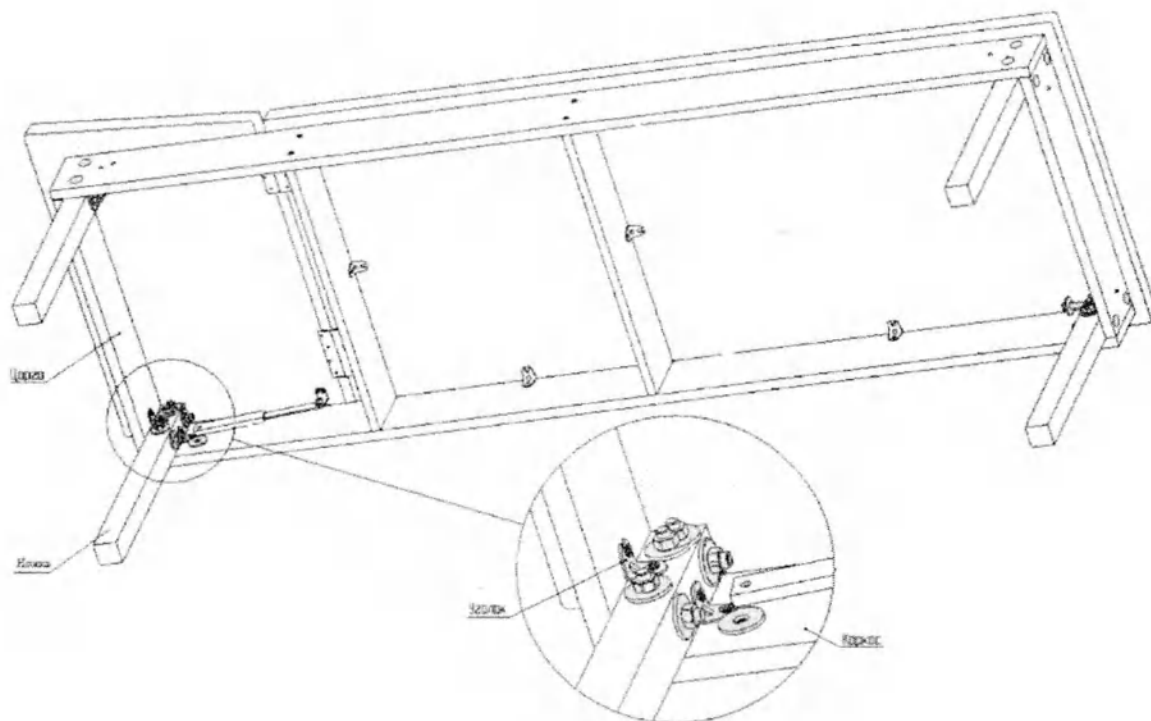


Инструкция по сборке «Ширма медицинская стационарная, в вариантах исполнения» и «Ширма медицинская передвижная, в вариантах исполнения»:

*Ширма медицинская стационарная, 1 секция, артикул 100284;
 Ширма медицинская стационарная, 2 секции, артикул 100285;
 Ширма медицинская стационарная, 3 секции, артикул 100286;
 Ширма медицинская передвижная, 1 секция, артикул 100290;
 Ширма медицинская передвижная, 2 секции, артикул 100291;
 Ширма медицинская передвижная, 3 секции, артикул 100292*

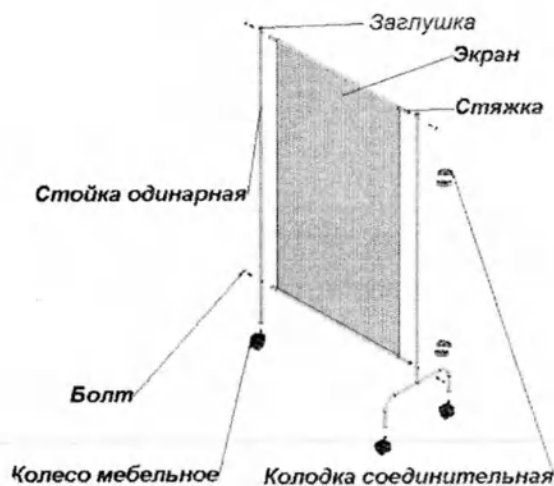

1. Продеть стяжки через полотно экрана.
2. Прикрепить стяжки экрана к стойкам болтами.
3. В зависимости от исполнения прикрепить колеса или вставить заглушки.
4. Соединить секции при помощи соединительных колодок.
5. Вставить заглушки в стойки.

Ширма медицинская стационарная, 1 секция, артикул 100287;
 Ширма медицинская стационарная, 2 секции, артикул 100288;
 Ширма медицинская стационарная, 3 секции, артикул 100289;
 Ширма медицинская передвижная, 1 секция, артикул 100293;
 Ширма медицинская передвижная, 2 секции, артикул 100294;
 Ширма медицинская передвижная, 3 секции, артикул 100295

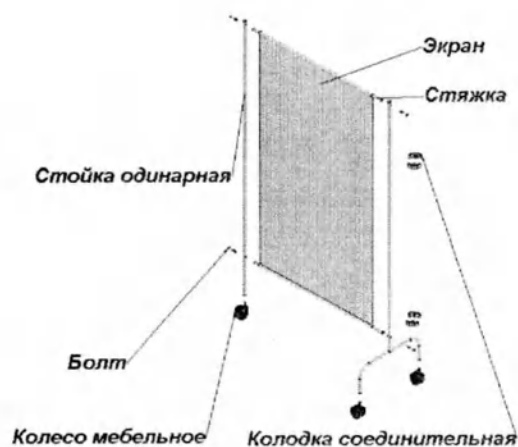

1. Продеть стяжки через полотно экрана.
2. Прикрепить стяжки экрана к стойкам болтами.
3. В зависимости от исполнения прикрепить колеса или вставить заглушки.
4. Соединить секции при помощи соединительных колодок.

Внешний вид. Стол медицинский с мойкой и тумбой, широкий, правый, артикул 100191



Внешний вид. Стол медицинский с мойкой и тумбой, широкий, левый, артикул 100192



Внешний вид. Подставка для ног медицинская двухступенчатая, артикул: 100283



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Набор мебели медицинской для физиотерапевтического кабинета

обозначение (модификация)

сериальный номер _____,
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией (ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022) и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
личная подпись

расшифровка подписи

МП

год, месяц, число

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель: Индивидуальный предприниматель Костров Александр Анатольевич

Адрес:

Тел.

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Набор мебели медицинской для физиотерапевтического кабинета

по ТУ 32.50.30-001-0184166233-2022

обозначение (модификация)

Серийный № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы изделия _____

б) Заполняет продавец

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняет исполнитель

Дата приемки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Исполнитель _____
подпись

Приме то
(69) мешков
губаст пресов
в 11 кофоб 111.

А. А. А.