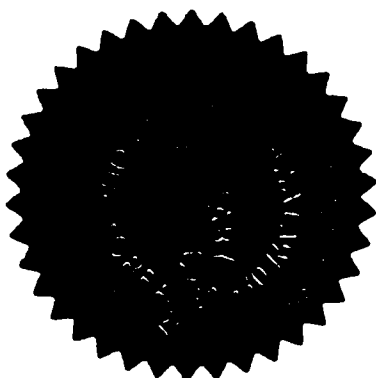


[별지 제 41호 서식]

Registered No. 2024 - 3012

NOTARIAL CERTIFICATE



PYEONG-HWA LAW AND NOTARY PUBLIC OFFICE
80-1, EULJI-RO, JUNG-GU, SEOUL, KOREA

DECLARATION

On behalf of MegaGen Implant Co.,Ltd, do hereby solemnly and sincerely declare

1. That the attached documents(s) :

Operational documentation

2. ☒ is (are) true and correct

☐ is (are) true translation for the text(s) originally written in the Korean language
conscientiously believing the same to be true and correct.

Manufacturer : MegaGen Implant Co.,Ltd

Name : Kwang-Bum Park

Job Title : President

Authorized Signature:



MEGA¹GENIMPLANT Co.,Ltd.
Kwang Bum PARK
KWANG BUM PARK / C.E.O



Date : 23 July, 2024



MegaGen Implant Co., Ltd.
45, Secheon-ro 7-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu.
Republic of Korea, 42921
T: +82 1544 2285 F: +82 (0)2 3463 2883
E-mail: intl.ruscis1@imegagen.com

«УТВЕРЖДАЮ»

MegaGen Implant Co., Ltd.

Генеральный директор / Chief Executive
Officer

(должность/position)

Парк Кванг Бум / Park Kwang Bum
(имя/name)

(подпись/signature)

«01» октября 2023 г.

«день» месяц (цифрами) / «day» month (numerals)

М.П. / Stamp



ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Система дентальных имплантатов



2023 г.

"MegaGen Implant Co., Ltd."

("МегаДжен Имплант Ко., Лтд.", Корея)

45, Secheon-ro 7-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, Republic of Korea, 42921

Настоящая инструкция на медицинское изделие «Система дентальных имплантатов, в составе (см. Приложение)» подготовлена с целью предоставления в органы власти Российской Федерации необходимой информации о медицинском изделии для его государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эксплуатационная документация подготовлена в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов РФ:

Правила государственной регистрации медицинских изделий, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 1416.

Требования к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия, утвержденные приказом Минздрава России от 19 января 2017 года N 11н.

Производитель медицинского изделия:

"МегаДжен Имплант Ко., Лтд.", Корея ("MegaGen Implant Co., Ltd."), Korea.

45, Secheon-ro 7-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu 42921, Republic of Korea

Тел: +82-53-222-29-85; +82-53-289-34-14

<https://imegagen.com>

intl.ruscis1@imegagen.com

Уполномоченный представитель производителя в России

ООО «Имплант Трейд»

Россия, 125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул. 3-я Ямского поля, д.18, помещ. III, ком.7

ИНН 7714499765

Тел.: +7 912 791 00 02

terentyev@mdgp.ru

СЕРТИФИКАТ

1. Наименование медицинского изделия

Система дентальных имплантатов (далее - изделие), в составе:

I. Имплантаты дентальные (Dental Implants):

1. Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture), варианты: FANHX3507C, FANHX3508C, FANHX3510C, FANHX3511C, FANHX3513C, FANHX3515C, FANHX3518C, FANHX4007C, FANHX4008C, FANHX4010C, FANHX4011C, FANHX4013C, FANHX4015C, FANHX4018C, FANHX4507C, FANHX4508C, FANHX4510C, FANHX4511C, FANHX4513C, FANHX4515C, FANHX4518C, FANHX5007C, FANHX5008C, FANHX5010C, FANHX5011C, FANHX5013C, FANHX5015C, FANHX5018C, FANHX5507C, FANHX5508C, FANHX5510C, FANHX5511C, FANHX5513C, FANHX5515C, FANHX5518C, FALHX6007C, FALHX6008C, FALHX6010C, FALHX6011C, FALHX6013C, FALHX6507C, FALHX6508C, FALHX6510C, FALHX6511C, FALHX6513C, FALHX7007C, FALHX7008C, FALHX7010C, FALHX7011C, FALHX7013C, FALHX7507C, FALHX7508C, FALHX7510C, FALHX7511C, FALHX7513C, FALHX8007C, FALHX8008C, FALHX8010C, FALHX8011C, FALHX8013C, AR384507C, AR384508C, AR384510C, AR384511C, AR384513C, AR384515C, AR384518C, AR385007C, AR385008C, AR385010C, AR385011C, AR385013C, AR385015C, AR385018C, AR435007C, AR435008C, AR435010C, AR435011C, AR435013C, AR435015C, AR435018C, AR385507C, AR385508C, AR385510C, AR385511C, AR385513C, AR385515C, AR385518C, AR435507C, AR435508C, AR435510C, AR435511C, AR435513C, AR435515C, AR435518C, AR436007C, AR436008C, AR436010C, AR436011C, AR436013C, AR485507C, AR485508C, AR485510C, AR485511C, AR485513C, AR485515C, AR333505C, AR334005C, AR334505C, AR384505C, AR335005C, AR385005C, AR435005C, AR335505C, AR385505C, AR485505C, в составе:

1.1 Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture), варианты: FANHX3507, FANHX3508, FANHX3510, FANHX3511, FANHX3513, FANHX3515, FANHX3518, FANHX4007, FANHX4008, FANHX4010, FANHX4011, FANHX4013, FANHX4015, FANHX4018, FANHX4507, FANHX4508, FANHX4510, FANHX4511, FANHX4513, FANHX4515, FANHX4518, FANHX5007, FANHX5008, FANHX5010, FANHX5011, FANHX5013, FANHX5015, FANHX5018, FANHX5507, FANHX5508, FANHX5510, FANHX5511, FANHX5513, FANHX5515, FANHX5518, FALHX6007, FALHX6008, FALHX6010, FALHX6011, FALHX6013, FALHX6507, FALHX6508, FALHX6510, FALHX6511, FALHX6513, FALHX7007, FALHX7008, FALHX7010, FALHX7011, FALHX7013, FALHX7507, FALHX7508, FALHX7510, FALHX7511, FALHX7513, FALHX8007, FALHX8008, FALHX8010, FALHX8011, FALHX8013, AR384507, AR384508, AR384510, AR384511, AR384513, AR384515, AR384518, AR385007, AR385008, AR385010, AR385011, AR385013, AR385015, AR385018, AR435007, AR435008, AR435010, AR435011, AR435013, AR435015, AR435018, AR385507, AR385508, AR385510, AR385511, AR385513, AR385515, AR385518, AR435507, AR435508, AR435510, AR435511, AR435513, AR435515, AR435518, AR436007, AR436008, AR436010, AR436011, AR436013, AR485507, AR485508, AR485510, AR485511, AR485513, AR485515, AR333505, AR334005, AR334505, AR384505, AR335005, AR385005, AR435005, AR335505, AR385505, AR485505 – 1 шт.

1.2 Винт-заглушка (Cover Screw) AANCSF3508 – 1 шт.

1.3 Инструкция по применению – 1 шт.

2. Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture), варианты: MIIF3010C, MIIF3011C, MIIF3013C, MIIF3015C, MIIF3308C, MIIF3310C, MIIF3311C, MIIF3313C, MIIF3315C, в составе:

2.1 Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture), варианты: MIF3010, MIF3011, MIF3013, MIF3015, MIF3308, MIF3310, MIF3311, MIF3313, MIF3315 – 1 шт.

2.2 Винт-заглушка (Cover Screw) MICS2505 – 1 шт.

2.3 Инструкция по применению – 1 шт.

II. Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane), варианты: IG1W4509, IG1W5510, IG1W6511, IG2W0918, IG2W1120, IG2W1323, IG3W0921, IG3W1125, IG3W1328, IG4W1128 – 1 шт.

III. Компоненты ортопедические (Prosthetic Components):

1. Абатмент временный (Temporary Abutment), варианты: AANTMN4012T, AANTMH4012T, MITA3012HT, в составе:

1.1 Абатмент временный (Temporary Abutment) AANTMN4012, AANTMH4012 – 1 шт.

- Винт Multi Post (Multi Post Screw) AANMSF – 1 шт.

1.2 Абатмент временный (Temporary Abutment) MITA3012H – 1 шт.

- Винт абатмента (Abutment screw) MIAS14 – 1 шт.

2. Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment), варианты: AANEPN4025L, AANEPN4035L,

AANEPN4045L, AANEPN4055L, AANEPN5025L, AANEPN5035L, AANEPN5045L,

AANEPN5055L, AANEPN6025L, AANEPN6035L, AANEPN6045L, AANEPN6055L,

AANEPN7025L, AANEPN7035L, AANEPN7045L, AANEPN7055L, AANEPH4025L,

AANEPH4035L, AANEPH4045L, AANEPH4055L, AANEPH5025L, AANEPH5035L,

AANEPH5045L, AANEPH5055L, AANEPH6025L, AANEPH6035L, AANEPH6045L,

AANEPH6055L, AANEPH7025L, AANEPH7035L, AANEPH7045L, AANEPH7055L,

AANEPN4027L, AANEPN4037L, AANEPN4047L, AANEPN4057L, AANEPN5027L,

AANEPN5037L, AANEPN5047L, AANEPN5057L, AANEPN6027L, AANEPN6037L,

AANEPN6047L, AANEPN6057L, AANEPN7027L, AANEPN7037L, AANEPN7047L,

AANEPN7057L, AANEPH4027L, AANEPH4037L, AANEPH4047L, AANEPH4057L,

AANEPH5027L, AANEPH5037L, AANEPH5047L, AANEPH5057L, AANEPH6027L,

AANEPH6037L, AANEPH6047L, AANEPH6057L, AANEPH7027L, AANEPH7037L,

AANEPH7047L, AANEPH7057L, MIEP3505HT, MIEP3515HT, MIEP3525HT, MIEP3535HT,

MIEP3545HT, MIEP3507HT, MIEP3517HT, MIEP3527HT, MIEP3537HT, MIEP3547HT, в составе:

2.1 Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment), варианты: AANEPN4025, AANEPN4035, AANEPN4045,

AANEPN4055, AANEPN5025, AANEPN5035, AANEPN5045, AANEPN5055, AANEPN6025,

AANEPN6035, AANEPN6045, AANEPN6055, AANEPN7025, AANEPN7035, AANEPN7045,

AANEPN7055, AANEPH4025, AANEPH4035, AANEPH4045, AANEPH4055, AANEPH5025,

AANEPH5035, AANEPH5045, AANEPH5055, AANEPH6025, AANEPH6035, AANEPH6045,

AANEPH6055, AANEPH7025, AANEPH7035, AANEPH7045, AANEPH7055, AANEPN4027,

AANEPN4037, AANEPN4047, AANEPN4057, AANEPN5027, AANEPN5037, AANEPN5047,

AANEPN5057, AANEPN6027, AANEPN6037, AANEPN6047, AANEPN6057, AANEPN7027,

AANEPN7037, AANEPN7047, AANEPN7057, AANEPH4027, AANEPH4037, AANEPH4047,

AANEPH4057, AANEPH5027, AANEPH5037, AANEPH5047, AANEPH5057, AANEPH6027,

AANEPH6037, AANEPH6047, AANEPH6057, AANEPH7027, AANEPH7037, AANEPH7047,

AANEPH7057 – 1 шт.

- Винт Multi Post (Multi Post Screw), варианты: AANMSF, AANMST – 2 шт.

2.2 Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment), варианты: MIEP3505H, MIEP3515H, MIEP3525H,

MIEP3535H, MIEP3545H, MIEP3507H, MIEP3517H, MIEP3527H, MIEP3537H, MIEP3547H – 1 шт.

- Винт абатмента (Abutment Screw) MIAS14 – 1 шт.

3. Абатмент CCM (CCM Abutment), варианты: AANCAN4012L, AANCAH4012L, в составе:

3.1 Абатмент CCM (CCM Abutment), варианты: AANCAN4012, AANCAH4012 – 1 шт.

3.2 Винт Multi Post (Multi Post Screw), варианты: AANMSF, AANMST – 2 шт.

4. Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment), варианты: MUAARN0015C, MUAARN0025C, MUAARN0035C, MUAARN0045C, в составе:

4.1 Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment), варианты: MUAARN0015, MUAARN0025, MUAARN0035, MUAARN0045 – 1 шт.

4.2 Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier) MUASC – 1 шт.

5. Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment), варианты: MUAARH1725LC, MUAARH1735LC, MUAARH1745LC, MUAARN1725LC, MUAARN1735LC, MUAARN1745LC, MUAARH3035LC, MUAARH3045LC, MUAARN3035LC, MUAARN3045LC, в составе:

5.1 Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment), варианты: MUAARH1725, MUAARH1735, MUAARH1745, MUAARN1725, MUAARN1735, MUAARN1745, MUAARH3035, MUAARH3045, MUAARN3035, MUAARN3045 – 1 шт.

5.2 Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Abutment Screw) MUAARSF, MUAARST – 2 шт.

5.3 Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier) MUAAC – 1 шт.

6. Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment), варианты: AANMAH4029L, AANMAH4039L, AANMAH4049L, AANMAH4059L, AANMAH5029L, AANMAH5039L, AANMAH5049L, AANMAH5059L, AANMAH6029L, AANMAH6039L, AANMAH6049L, AANMAH6059L, AANMAH7029L, AANMAH7039L, AANMAH7049L, AANMAH7059L, ARBOT4019HL, ARBOT4019NL, MIMA3005HT, MIMA3015HT, MIMA3025HT, MIMA3035HT, MIMA3045HT, MIMA3007HT, MIMA3017HT, MIMA3027HT, MIMA3037HT, MIMA3047HT, MIMA3505HT, MIMA3515HT, MIMA3525HT, MIMA3535HT, MIMA3545HT, MIMA3507HT, MIMA3517HT, MIMA3527HT, MIMA3537HT, MIMA3547HT в составе:

6.1 Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment), варианты: AANMAH4029, AANMAH4039, AANMAH4049, AANMAH4059, AANMAH5029, AANMAH5039, AANMAH5049, AANMAH5059, AANMAH6029, AANMAH6039, AANMAH6049, AANMAH6059, AANMAH7029, AANMAH7039, AANMAH7049, AANMAH7059, ARBOT4019H, ARBOT4019N – 1 шт.

- Винт Multi Post (Multi Post Screw), варианты: AANMSF, AANMST – 2 шт.

6.2 Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment), варианты: MIMA3005H, MIMA3015H, MIMA3025H, MIMA3035H, MIMA3045H, MIMA3007H, MIMA3017H, MIMA3027H, MIMA3037H, MIMA3047H, MIMA3505H, MIMA3515H, MIMA3525H, MIMA3535H, MIMA3545H, MIMA3507H, MIMA3517H, MIMA3527H, MIMA3537H, MIMA3547H – 1 шт.

- Винт абатмента (Abutment Screw) MIAS14 – 1 шт.

7. Абатмент Octa (Octa Abutment), варианты: AANOAF4010, AANOAF4020, AANOAF4030, AANOAF4040, AANOAF4050, AANOAF0010, AANOAF0020, AANOAF0030, AANOAF0040, AANOAF0050 – 1 шт.

8. Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment), варианты: AFAP5545P, AFAA5415P, AFAA5425P, AANTAH5012T, MFAP3545P, MFAA3415P, в составе:

8.1 Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment), варианты: AFAP5545, AFAA5415, AFAA5425, AANTAH5012 – 1 шт.

- Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap), варианты: AFCP, AFCA15, AFCA25 – 1 шт.

- Винт Multi Post (Multi Post Screw) AANMSF – 1 шт.

8.2 Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment), варианты: MFAP3545, MFAA3415 – 1 шт.

- Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap), варианты: MFCP, MFCA15 – 1 шт.

- Винт абатмента (Abutment Screw) MIAS14 – 1 шт.

9. Абатмент угловой (Angled Abutment), варианты: AANAAN4215L, AANAAN4315L,

AANAAN4415L, AANAAN4515L, AANAAN5215L, AANAAN5315L, AANAAN5415L,

AANAAN5515L, AANAAN6215L, AANAAN6315L, AANAAN6415L, AANAAN6515L,

AANAAN7215L, AANAAN7315L, AANAAN7415L, AANAAN7515L, AANAAN4225L,

AANAAN4325L, AANAAN4425L, AANAAN4525L, AANAAN5225L, AANAAN5325L,

AANAAN5425L, AANAAN5525L, AANAAN6225L, AANAAN6325L, AANAAN6425L,

AANAAN6525L, AANAAN7225L, AANAAN7325L, AANAAN7425L, AANAAN7525L,

AANAAN4215L, AANAAN4315L, AANAAN4415L, AANAAN4515L, AANAAN5215L,

AANAAN5315L, AANAAN5415L, AANAAN5515L, AANAAN6215L, AANAAN6315L,

AANAAN6415L, AANAAN6515L, AANAAN7215L, AANAAN7315L, AANAAN7415L,

AANAAN7515L, AANAAN4225L, AANAAN4325L, AANAAN4425L, AANAAN4525L,

AANAAN5225L, AANAAN5325L, AANAAN5425L, AANAAN5525L, AANAAN6225L,

AANAAN6325L, AANAAN6425L, AANAAN6525L, AANAAN7225L, AANAAN7325L,

AANAAN7425L, AANAAN7525L, MIAA3215HT, MIAA3315HT, MIAA3415HT, MIAA3215ET,

MIAA3315ET, MIAA3415ET, в составе:

9.1 Абатмент угловой (Angled Abutment), варианты: AANAAN4215, AANAAN4315,

AANAAN4415, AANAAN4515, AANAAN5215, AANAAN5315, AANAAN5415, AANAAN5515,

AANAAN6215, AANAAN6315, AANAAN6415, AANAAN6515, AANAAN7215, AANAAN7315,

AANAAN7415, AANAAN7515, AANAAN4225, AANAAN4325, AANAAN4425, AANAAN4525,

AANAAN5225, AANAAN5325, AANAAN5425, AANAAN5525, AANAAN6225, AANAAN6325,

AANAAN6425, AANAAN6525, AANAAN7225, AANAAN7325, AANAAN7425, AANAAN7525,

AANAAN4215, AANAAN4315, AANAAN4415, AANAAN4515, AANAAN5215, AANAAN5315,

AANAAN5415, AANAAN5515, AANAAN6215, AANAAN6315, AANAAN6415, AANAAN6515,

AANAAN7215, AANAAN7315, AANAAN7415, AANAAN7515, AANAAN4225, AANAAN4325,

AANAAN4425, AANAAN4525, AANAAN5225, AANAAN5325, AANAAN5425, AANAAN5525,

AANAAN6225, AANAAN6325, AANAAN6425, AANAAN6525, AANAAN7225, AANAAN7325,

AANAAN7425, AANAAN7525 – 1 шт.

- Винт Multi Post (Multi Post Screw), варианты: AANMSF, AANMST – 2 шт.

9.2 Абатмент угловой (Angled Abutment), варианты: MIAA3215H, MIAA3315H, MIAA3415H,
MIAA3215E, MIAA3315E, MIAA3415E – 1 шт.

- Винт абатмента (Abutment Screw) MIAS14 – 1 шт.

10. Абатмент примерочный (Try-in Abutment), варианты: MUTIAAR00C, MUTIAAR17C,
MUTIAAR30C, в составе:

10.1 Абатмент примерочный (Try-in Abutment), варианты: MUTIAAR00, MUTIAAR17,
MUTIAAR30 – 1 шт.

10.2 Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier) MUAAC – 1 шт.

11. Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment), варианты: ADR00, ADR01, ADR02, ADR03,
ADR04, ADR05, ADR06, MDR00, MDR01, MDR02, MDR03, MDR04, MDR05, MDR06 – 1 шт.

12. Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment), варианты: MBAR00, MBAR10, MBAR20, MBAR30,
MBAR40, MBAR50, MBAR60, MBAR70 – 1 шт.

13. Абатмент сканируемый (Scan Abutment), варианты: AANISR4009T, AANISR4013T, AOCESC4011T, AMUASR4013T, MISS3509T, MISS3513T, в составе:

13.1 Абатмент сканируемый (Scan Abutment), варианты: AANISR4009, AANISR4013 – 1 шт.

- Винт Multi Post (Multi Post Screw) SAAANMSF – 1 шт.

13.2 Абатмент сканируемый (Scan Abutment), варианты: AOCESC4011, MISS3509, MISS3513 – 1 шт.

- Винт абатмента (Abutment Screw), варианты: SAIRCS200, SAMIAS14 – 1 шт.

13.3 Абатмент сканируемый (Scan Abutment) AMUASR4013 – 1 шт.

- Винт цилиндра (Cylinder Screw) SAMUAS – 1 шт.

14. Абатмент сканируемый Тип C (Scan Abutment C-type), варианты: ARICSS3405T, ARICSS3410T, ARICSS3420T, ARICSS3805T, ARICSS3810T, ARICSS3820T, ARICSL4505T, ARICSL4510T, ARICSL4520T, в составе:

14.1 Абатмент сканируемый Тип C (Scan Abutment C-type) варианты: ARICSS3405, ARICSS3410, ARICSS3420, ARICSS3805, ARICSS3810, ARICSS3820, ARICSL4505, ARICSL4510, ARICSL4520 – 1 шт.

14.2 Винт Multi Post (Multi Post Screw) SAAANMSF – 1 шт.

15. Абатмент премил (TiGen Abutment), варианты: ARTR1020.MTN, ARTR1020N.MTN, ARTR1220.MTN, ARTR1220N.MTN, OCTS1020.MTN, NOTS1020.MTN, OCTS1220.MTN, NOTS1220.MTN, OCTR1020.MTN, NOTR1020.MTN, OCTR1220.MTN, NOTR1220.MTN, MITN1020.MTN, MITN1020N.MTN, в составе:

15.1 Абатмент премил (TiGen Abutment), варианты: ARTR1020, ARTR1020N, ARTR1220, ARTR1220N – 10 шт.

- Винт Multi Post (Multi Post Screw), варианты: AANMSF, AANMST – 13 шт.

15.2 Абатмент премил (TiGen Abutment), варианты: OCTS1020, NOTS1020, OCTS1220, NOTS1220, OCTR1020, NOTR1020, OCTR1220, NOTR1220, MITN1020, MITN1020N – 10 шт.

- Винт абатмента (Abutment Screw), варианты: IRCS200, MIAS14 – 13 шт.

16. Винт-заглушка (Cover Screw), варианты: AANCSF3508, AANCSF3516, AANCSF3526, MICS2505 – 1 шт.

17. Винт-заглушка i-Gen (i-Gen Cover Screw) ICS3510 – 1 шт.

18. Винт i-Gen (i-Gen Screw), варианты: IA1810, IA1820, IA1830, IA1840, IA1850, IA1415, IA1420, IA1430, IA1440, IA1450 – 1 шт.

19. Винт Multi Post (Multi Post Screw), варианты: AANMST, AANMSF, SAAANMSF – 1 шт.

20. Винт абатмента (Abutment Screw), варианты: IRCS200, SAIRCS200, MIAS14, SAMIAS14, MIAZ1410 – 1 шт.

21. Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Abutment Screw), варианты: MUAARSF, MUAARST – 1 шт.

22. Винт цилиндра (Cylinder Screw), варианты: SAMUAS, MUAS – 1 шт.

23. Винт S.H.A (S.H.A Screw), варианты: ARIHS1804, ARIHS1805, ARIHS1807 – 1 шт.

24. Навигационный пин (Guide Pin), варианты: MUAGP, AANGPT12H, AANGPT16H, AANGPP0010, AANGPP0015, AANGPP0020, AAOPGP10, AAOPGP12, AAOTGP10, AAOTGP12, MIGPT12, MIGPT16, MIGPP12, MIGPP16 – 1 шт.

25. Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer), варианты: AANITN4012H, AANITN4016H, AANITN5012H, AANITN5016H, AANITH4012HT, AANITH4016HT, AANITH5012HT, AANITH5016HT, AAOITO4010T, AAOITN4010T, AAOITO4012T, AAOITN4012T, AAOITO5010T, AAOITN5010T, AAOITO5012T, AAOITN5012T, МИТ3512HT, МИТ3516HT в составе:

25.1 Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer), варианты: AANITN4012H, AANITN4016H, AANITN5012H, AANITN5016H, AANITH4012, AANITH4016, AANITH5012, AANITH5016, AAOITO4010, AAOITN4010, AAOITO4012, AAOITN4012, AAOITO5010, AAOITN5010, AAOITO5012, AAOITN5012, МИТ3512H, МИТ3516H – 1 шт.

25.2 Навигационный пин (Guide Pin), варианты: AANGPT12H, AANGPT16H, AAOTGP10, AAOTGP12, MIGPT12, MIGPT16 – 1 шт.

26. Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coping, Pick-up), варианты: AANIPH4007T, AANIPN4007T, AANIPH4012T, AANIPN4012T, AANIPH4016T, AANIPN4016T, AANIPH5007T, AANIPN5007T, AANIPH5012T, AANIPN5012T, AANIPH6007T, AANIPH6012T, AANIPN6007T, AANIPN6012T, AANIPH7007T, AANIPH7012T, AANIPN7007T, AANIPN7012T, AAOIPO4010T, AAOIPN4010T, AAOIPO4012T, AAOIPN4012T, AAOIPO5010T, AAOIPN5010T, AAOIPO5012T, AAOIPN5012T, MUAICT, МИР3512HT, МИР3516HT, в составе:

26.1 Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coping, Pick-up), варианты: AANIPH4007, AANIPN4007, AANIPH4012, AANIPN4012, AANIPH4016, AANIPN4016, AANIPH5007, AANIPN5007, AANIPH5012, AANIPN5012, AANIPH6007, AANIPH6012, AANIPN6007, AANIPN6012, AANIPH7007, AANIPH7012, AANIPN7007, AANIPN7012, AAOIPO4010, AAOIPN4010, AAOIPO4012, AAOIPN4012, AAOIPO5010, AAOIPN5010, AAOIPO5012, AAOIPN5012, MUAIC, МИР3512H, МИР3516H – 1 шт.

26.2 Навигационный пин (Guide Pin), варианты: AANGPP0010, AANGPP0015, AANGPP0020, AAOPGP10, AAOPGP12, MUAGP, MIGPP12, MIGPP16 – 1 шт.

27. Трансфер слепочный металлический (Stainless Impression Coping) 044CAIN – 2 шт.

28. Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping), варианты: AANSIF440, AANSIF455, AANSIF470, AANSIF540, AANSIF555, AANSIF570, AANSIF640, AANSIF655, AANSIF670, AANSIF740, AANSIF755, AANSIF770 – 1 шт.

29. Аналог лабораторный (Lab Analog), варианты: AANLAF35, AANLAF4055, AALLAF6080, AANSLF440, AANSLF455, AANSLF470, AANSLF540, AANSLF555, AANSLF570, AANSLF640, AANSLF655, AANSLF670, AANSLF740, AANSLF755, AANSLF770, AANOLA4000, IOA300, MUALA, PLA, MILA300H – 1 шт.

30. Аналог RP (RP Analog), варианты: CANIAR4009, OCTARA4, OCTARA5, CMIIAN3009 – 1 шт.

31. Цилиндр временный (Temporary Cylinder), варианты: AANOTCO4010T, AANOTCO5010T, AANOTCN4010T, AANOTCN5010T, MUATCL, в составе:

31.1 Цилиндр временный (Temporary Cylinder), варианты: AANOTCO4010, AANOTCO5010, AANOTCN4010, AANOTCN5010 – 1 шт.

- Винт абатмента (Abutment Screw) IRCS200 – 1 шт.

31.2 Цилиндр временный (Temporary Cylinder) MUATC – 1 шт.

- Винт цилиндра (Cylinder Screw) MUAS – 2 шт.

32. Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder), варианты: AANBCB470, AANBCB570, AANBCB670, AANBCB770, AANBCS470, AANBCS570, AANBCS670, AANBCS770 – 1 шт.

33. Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder), варианты: AAOECO4005T, AAOECO4007T, AAOECO5005T, AAOECO5007T, AAOECN4005T, AAOECN4007T, AAOECN5005T, AAOECN5007T, в составе:

33.1 Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder), варианты: AAOECO4005, AAOECO4007, AAOECO5005, AAOECO5007, AAOECN4005, AAOECN4007, AAOECN5005, AAOECN5007 – 1 шт.

33.2 Винт абатмента (Abutment Screw) IRCS200 – 1 шт.

34. Цилиндр CCM (CCM Cylinder), варианты: AANCCO4000T, AANCCN4000T, AANCCO5000T, AANCCN5000T, MUACCML, в составе:

34.1 Цилиндр CCM (CCM Cylinder), варианты: AANCCO4000, AANCCN4000, AANCCO5000, AANCCN5000 – 1 шт.

- Винт абатмента (Abutment Screw) IRCS200 – 1 шт.

34.2 Цилиндр CCM (CCM Cylinder) MUACCM – 1 шт.

- Винт цилиндра (Cylinder Screw) MUAS – 2 шт.

35. Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder), варианты: AAOTCO4010T, IOPH100T, AAOTCN4010T, IOPN100T, в составе:

35.1 Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder), варианты: AAOTCO4010, IOPH100, AAOTCN4010, IOPN100 – 1 шт.

35.2 Винт абатмента (Abutment Screw) IRCS200 – 1 шт.

36. Колпачок защитный (Comfort Cap), варианты: AANCCF440, AANCCF455, AANCCF470, AANCCF540, AANCCF555, AANCCF570, AANCCF640, AANCCF655, AANCCF670, AANCCF740, AANCCF755, AANCCF770 – 1 шт.

37. Колпачок предохраняющий (Healing Cap), варианты: AANOHC4000T, IHC400T, MUAHCL, MUAHCWL, в составе:

37.1 Колпачок предохраняющий (Healing Cap), варианты: AANOHC4000, IHC400 – 1 шт.

- Винт абатмента (Abutment Screw) IRCS200 – 1 шт.

37.2 Колпачок предохраняющий (Healing Cap), варианты: MUAHC, MUAHCW – 1 шт.

- Винт цилиндра (Cylinder Screw) MUAS – 2 шт.

38. Скан пост (Scan Post), варианты: SP4007.MTN, SP5007.MTN, SP6007.MTN, SP7007.MTN – 10 шт.

39. Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap), варианты: AFCP, AFCA15, AFCA25 – 1 шт.

40. Металлическая матрица с ретенционным кольцом (Metal Housing) MBHR – 1 шт.

41. Ретенционное кольцо (Retentive Ring), варианты:

41.1 Ретенционное кольцо (Retentive Ring) MBR5 – 5 шт.

41.2 Ретенционное кольцо (Retentive Ring) MBR10 – 10 шт.

42. Матрица металлическая (Stainless Steel Housing), варианты: MHP, THP – 5 шт.

43. Колпачок ретенционный (Retentive Cap), варианты: RCWP, RCVP, RCPP, RCYP, RCBP – 5 шт.

IV. Формирователь десны (Healing Abutment), варианты:

1. Формирователь десны (Healing Abutment), варианты: AANHAF0403, AANHAF0404, AANHAF0405, AANHAF0406, AANHAF0407, AANHAF0408, AANHAF0409, AANHAF0503, AANHAF0504, AANHAF0505, AANHAF0506, AANHAF0507, AANHAF0508, AANHAF0509, AANHAF0603, AANHAF0604, AANHAF0605, AANHAF0606, AANHAF0607, AANHAF0608, AANHAF0609, AANHAF0703, AANHAF0704, AANHAF0705, AANHAF0706, AANHAF0707, AANHAF0708, AANHAF0709, AANHAF0803, AANHAF0804, AANHAF0805, AANHAF0806, AANHAF0807, AANHAF0808, AANHAF0809, AANHAF1003, AANHAF1004, AANHAF1005, AANHAF1006, AANHAF1007, AANHAF1008, AANHAF1009, МИА3025, МИА3030, МИА3040, МИА3050, МИА3060, МИА3070, МИА3080, МИА3090, МИА3525, МИА3530, МИА3540, МИА3550, МИА3560, МИА3570, МИА3580, МИА3590 – 1 шт.

2. Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment), варианты: ARISH4004T, ARISH4005T, ARISH4007T, ARISH5004T, ARISH5005T, ARISH5007T, ARISH6004T, ARISH6005T, ARISH6007T, ARISH7004T, ARISH7005T, ARISH7007T, в составе:

2.1 Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment), варианты: ARISH4004, ARISH4005, ARISH4007, ARISH5004, ARISH5005, ARISH5007, ARISH6004, ARISH6005, ARISH6007, ARISH7004, ARISH7005, ARISH7007 – 1 шт.

2.2 Винт S.H.A (S.H.A Screw), варианты: ARIHS1804, ARIHS1805, ARIHS1807 – 1 шт.

3. Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment), варианты: FHA402, FHA403, FHA404 – 1 шт.

V. Титановое основание (ZrGen Abutment), варианты:

1. Титановое основание (ZrGen Abutment), варианты: AANIPR4015.MTN, AANIPR4016.MTN, AANIPR4018.MTN, AANIPR4025.MTN, AANIPR4026.MTN, AANIPR4028.MTN, AANIPR4035.MTN, AANIPR4036.MTN, AANIPR4038.MTN, AANIPR4045.MTN, AANIPR4046.MTN, AANIPR4048.MTN, AANIPR4015N.MTN, AANIPR4016N.MTN, AANIPR4018N.MTN, AANIPR4025N.MTN, AANIPR4026N.MTN, AANIPR4028N.MTN, AANIPR4035N.MTN, AANIPR4036N.MTN, AANIPR4038N.MTN, AANIPR4045N.MTN, AANIPR4046N.MTN, AANIPR4048N.MTN, AANIPR4515.MTN, AANIPR4516.MTN, AANIPR4518.MTN, AANIPR4525.MTN, AANIPR4526.MTN, AANIPR4528.MTN, AANIPR4535.MTN, AANIPR4536.MTN, AANIPR4538.MTN, AANIPR4545.MTN, AANIPR4546.MTN, AANIPR4548.MTN, AANIPR4515N.MTN, AANIPR4516N.MTN, AANIPR4518N.MTN, AANIPR4525N.MTN, AANIPR4526N.MTN, AANIPR4528N.MTN, AANIPR4535N.MTN, AANIPR4536N.MTN, AANIPR4538N.MTN, AANIPR4545N.MTN,

AANIPR4546N.MTN, AANIPR4548N.MTN, AOCEPS5015.MTN, AOCEPS5016.MTN, AOCEPS5018.MTN, ANOEPS5015.MTN, ANOEPS5016.MTN, ANOEPS5018.MTN, AOCEPR5515.MTN, AOCEPR5516.MTN, AOCEPR5518.MTN, ANOEP5515.MTN, ANOEP5516.MTN, ANOEP5518.MTN, AMUAPR5515N.MTN, AMUAPR5516N.MTN, AMUAPR5518N.MTN, MIPN3013.MTN, MIPN3013N.MTN, в составе:

1.1 Титановое основание (ZrGen Abutment), варианты: AANIPR4015, AANIPR4016, AANIPR4018, AANIPR4025, AANIPR4026, AANIPR4028, AANIPR4035, AANIPR4036, AANIPR4038, AANIPR4045, AANIPR4046, AANIPR4048, AANIPR4015N, AANIPR4016N, AANIPR4018N, AANIPR4025N, AANIPR4026N, AANIPR4028N, AANIPR4035N, AANIPR4036N, AANIPR4038N, AANIPR4045N, AANIPR4046N, AANIPR4048N, AANIPR4515, AANIPR4516, AANIPR4518, AANIPR4525, AANIPR4526, AANIPR4528, AANIPR4535, AANIPR4536, AANIPR4538, AANIPR4545, AANIPR4546, AANIPR4548, AANIPR4515N, AANIPR4516N, AANIPR4518N, AANIPR4525N, AANIPR4526N, AANIPR4528N, AANIPR4535N, AANIPR4536N, AANIPR4538N, AANIPR4545N, AANIPR4546N, AANIPR4548N – 10 шт.

- Винт Multi Post (Multi Post Screw), варианты: AANMSF, AANMST – 13 шт.

1.2 Титановое основание (ZrGen Abutment), варианты: AOCEPS5015, AOCEPS5016, AOCEPS5018, ANOEPS5015, ANOEPS5016, ANOEPS5018, AOCEPR5515, AOCEPR5516, AOCEPR5518, ANOEP5515, ANOEP5516, ANOEP5518, MIPN3013, MIPN3013N – 10 шт.

- Винт абатмента (Abutment Screw), варианты: IRCS200, MIAZ1410 – 13 шт.

1.3 Титановое основание (ZrGen Abutment), варианты: AMUAPR5515N, AMUAPR5516N, AMUAPR5518N – 10 шт.

- Винт цилиндра (Cylinder Screw) MUAS – 13 шт.

2. Титановое основание Тип C (ZrGen Abutment C-Type), варианты: ARCS3405.MTN, ARCS3410.MTN, ARCS3420.MTN, ARCS3805.MTN, ARCS3810.MTN, ARCS3820.MTN, ARCL4505.MTN, ARCL4510.MTN, ARCL4520.MTN, в составе:

2.1 Титановое основание Тип C (ZrGen Abutment C-Type), варианты: ARCS3405, ARCS3410, ARCS3420, ARCS3805, ARCS3810, ARCS3820, ARCL4505, ARCL4510, ARCL4520 – 10 шт.

2.2 Винт Multi Post (Multi Post Screw) AANMSF, AANMST – 13 шт.

VI. Набор Meg-Ball для съемного протезирования (Meg-Ball Package), варианты: MBAR00P, MBAR10P, MBAR20P, MBAR30P, MBAR40P, MBAR50P, MBAR60P, MBAR70P, в составе:

1. Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment), варианты: MBAR00, MBAR10, MBAR20, MBAR30, MBAR40, MBAR50, MBAR60, MBAR70 – 1 шт.

2. Металлическая матрица с ретенционным кольцом (Metal Housing) MBHR – 1 шт.

3. Позиционер матрицы (Housing Positioner), варианты: MBP00, MBP05, MBP10, MBP15 – 4 шт.

VII. Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System), варианты: ADR00P, ADR01P, ADR02P, ADR03P, ADR04P, ADR05P, ADR06P, ADR00PA, ADR01PA, ADR02PA, ADR03PA, ADR04PA, ADR05PA, ADR06PA, MDR00P, MDR01P, MDR02P, MDR03P, MDR04P, MDR05P, MDR06P, MDR00PA, MDR01PA, MDR02PA, MDR03PA, MDR04PA, MDR05PA, MDR06PA, в составе:

1. Абатмент Meg-Rhein (Abutment Meg-Rhein), варианты: ADR00, ADR01, ADR02, ADR03, ADR04, ADR05, ADR06, MDR00, MDR01, MDR02, MDR03, MDR04, MDR05, MDR06 – 1 шт;

2. Колпачок ретенционный (Retentive Cap), варианты: RCWP, RCVP, RCPP, RCYP, RCBP – 5 шт.

3. Трансфер слепочный пластиковый (Plastic Impression Coping) PIC – 1 шт.

4. Матрица металлическая (Stainless Steel Housing), варианты: MHP, THP – 1 шт.

5. Диск защитный (Protective Disk) PD1515 – 1 шт.

VIII. Инструменты стоматологические (Dental Instruments):

- 1. Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier), варианты: MUAAC, MUASC – 1 шт.**
- 2. Отвертка Multi-unit (Multi-unit Driver), варианты: MUD10, TCMMUDS20, TCMMUDL20 – 1 шт.**
- 3. Отвертка для извлечения Multi-unit (Multi-unit Removal Driver) MUARD20 – 1 шт.**
- 4. Отвертка ручная (Hand Driver), варианты: MUHD1220, TCMHDS1600, TCMHDS1200, TCMHDL1200, TCMHDE1200 – 1 шт.**
- 5. Отвертка машинная Multi-unit (Right Angle Driver Multi-unit) MURAD10 – 1 шт.**
- 6. Отвертка для слепочного трансфера (Impression Driver), варианты: TCMID, TCMIDE – 1 шт.**
- 7. Отвертка для извлечения абатмента (Abutment Removal Driver), варианты: TANMRD18, TANMRD25 – 1 шт.**
- 8. Отвертка Octa (Octa Driver), варианты: MOD300S, MOD300L – 1 шт.**
- 9. Отвертка для углового наконечника (Right Angle Driver), варианты: MDR120SS, MDR120S, MDR120L, MDR120EL – 1 шт.**
- 10. Отвертка установочная (Insert Driver), варианты: MID120S, MID120L – 1 шт.**
- 11. Отвертка для установки ретенционного колпачка (Retentive Cap Insertion Tool) 085IAC – 1 шт.**
- 12. Сверло копьевидное (Lance Drill), варианты: MGD100L, LD1618S, LD1618M, LD1618L, LD2015, LD2025, LD2030 – 1 шт.**
- 13. Фреза маркировочная (Marking Drill), варианты: TANTDF2018, TANSDF3318, TANSDF3818, TANSDF4318, TANSDF4815, TANSDF5415, TANSDF5915 – 1 шт.**
- 14. Фреза формирующая (Shaping Drill), варианты: SD2818S, SD2518M, SD2518L, SD2518S, SD2818M, SD2818L – 1 шт.**
- 15. Фреза со стоппером (Stopper Drill), варианты: TANTDF2007, TANTDF2008, TANTDF2010, TANTDF2011, SD2807M, SD2808M, SD2810M, SD2811M, TANSDF3307, TANSDF3308, TANSDF3310, TANSDF3311, TANSDF3807, TANSDF3808, TANSDF3810, TANSDF3811, TANSDF4307, TANSDF4308, TANSDF4310, TANSDF4311, TANSDF4807, TANSDF4808, TANSDF4810, TANSDF4811 – 1 шт.**
- 16. Трепан с центральным пином (Point Trephine Bur) SPTB4050 – 1 шт.**

17. Фреза кортикальная (Cortical Bone Drill), варианты: TANCDL3500, TANCDL4055, TANCDL6080 – 1 шт.
18. Бур трепанационный (Trephine Bur), варианты: TANTBL2535, TANTBL4050, TANTBL5060, TANTBL6070, TANTBE2535, TANTBE4050, TANTBE5060, TANTBE6070 – 1 шт.
19. Профилировщик кости (Bone Profiler), варианты: TANBPL40G, TANBPL50G, TANBPS60G, TANBPS70G, в составе:
- 19.1 Профилировщик кости (Bone Profiler), варианты: TANBPL40, TANBPL50, TANBPS60, TANBPS70 – 1 шт.
- 19.2 Навигационный пин для профилировщика кости (Bone Profiler Guide Pin) TANPGF3305 – 1 шт.
20. Сверло Линдемманна (Lindermann Drill) TEEL200M – 1 шт.
21. Фреза выравнивающая (Flattening Drill), варианты: FD5020, FD6020 – 1 шт.
22. Перфоратор слизистой оболочки (Tissue Punch), варианты: TCMTPM0304, TCMTPM0405, TCMTPM0506, TCMTPM0607, TCMTPM0708 – 1 шт.
23. Триммер лунки (Hole Trimmer), варианты: варианты: AGHTN2, AGHTR2, AGHTW2, AGHTN3, AGHTR3, AGHTW3 – 1 шт.
24. Фреза Auto-Max (Auto-Max), варианты: AM2535, AM4050, AM5060, AM6070 – 1 шт.
25. Имплантовод машинный (Handpiece Connector), варианты: TANHCU, TANHCS, TANHCL, HCS17, HCL17, OHCS, TBH250S, TBH250L – 1 шт.
26. Имплантовод для храпового ключа (Ratchet Connector), варианты: TANREU, TANRES, TANREL, RCS17, RCL17, ORCS – 1 шт.
27. Удлинитель фрез (Drill Extension) MDE150 – 1 шт.
28. Пин параллельности (Directon Indicator) MDI100 – 1 шт.
29. Ключ динамометрический (Torque Wrench) MTW300AT, в составе:
- 29.1 Ключ динамометрический (Torque Wrench) MTW300A – 1 шт.
- 29.2 Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter) TTAR100 – 1 шт.
30. Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter), варианты: TTAI100, TTAR100 – 1 шт.
31. Удлинитель для храпового ключа (Ratchet Extension), варианты: TBR250S, TBR250L – 1 шт.
32. Отвертка для ключа динамометрического (Torque Driver), варианты: TBT250S, TBT250L – 1 шт.

33. Втулка шаблона (Stent Sleeve), варианты: R2SS35P, R2SS50P, R2SS65P – 10 шт.

IX. Инструкция по применению.

2. Назначение и область применения изделия

Изделия *предназначены* для хирургической имплантации в альвеолярную и/или базальную кость нижней или верхней челюсти для установки и фиксации дентального протеза (например, моста, отдельного зуба, покрывного протеза), с целью восстановления жевательной функции и улучшения внешнего вида зубного ряда пациента.

Область применения медицинского изделия - стоматология.

Способ применения

Хирургические манипуляции (операция).

3. Показания, потенциальные пользователи изделия

Показания к применению

Частичная или полная адентия, при:

- пародонтите (заболевание пародонта);
- кариесе (разрушенный зуб);
- потере зубов вследствие несчастного случая;
- врожденном отсутствии зубов;
- потере зубов в результате других нарушений целостной кости.

Потенциальные пользователи изделия

Изделие может применяться лицам старше 18 лет независимо от пола пациента, в условиях лечебных учреждений стоматологического профиля.

Использование изделия допускается исключительно специализированным персоналом. Стоматологическая хирургия должна выполняться только врачами-стоматологами, хирургами, имплантологами, имеющими подготовку и опыт в области челюстно-лицевой хирургии, а также диагностики и предоперационного планирования.

Для обеспечения безопасности и эффективности применения изделия, врач должен освоить все хирургические навыки и пройти специальное обучение для правильного планирования лечения и успешного выполнения операции. Хирургические и реставрационные приемы, необходимые для работы с этими изделиями, являются узкоспециализированными и сложными процессами. Недостаточные знания и отсутствие практических навыков могут привести к неудовлетворительному результату лечения (отторжению имплантата).

При установке имплантатов производства компании MegaGen Implant Co., Ltd. (МегаДжен Имплант Ко., Лтд.) и создания ортопедических конструкций рекомендуется использовать только оригинальные инструменты для установки имплантатов, производимые этой же компанией.

4. Условия применения изделия

- Изделие применяется - однократно!
- Применение изделия - только в специализированных (стоматологических) лечебных учреждениях

➤ Хирургические манипуляции при работе с изделием должны проводиться в асептическом помещении, во избежание инфицирования пациента во время операции.

➤ Перед использованием изделия необходимо ознакомиться с инструкцией.

5. Принцип работы изделия

Имплантат дентальный

Имплантат выполняет роль искусственного зубного корня. Абатмент устанавливается на в имплантат и фиксируется винтом. Абатмент и другие ортопедические компоненты, создают конструкцию, цель которой - восстановление жевательной функции и улучшение внешнего вида пациента. Становится возможным воспроизвести форму и функцию натуральных зубов.

Абатменты дентальные и другие ортопедические компоненты, а также титановое основание и формирователь десны (далее - компоненты) выполняют функцию соединительного элемента между дентальным имплантатом и коронкой. Лабораторные компоненты используются для снятия оттисков, изготовления моделей в зуботехнической лаборатории и создания ортопедических конструкций с опорой на имплантаты. Изделия позволяют выполнять различные варианты протезных реставраций, обеспечивая винтовую, цементную и комбинированную фиксацию коронки.

Инструменты стоматологические

Инструменты используются для установки дентальных имплантатов и ортопедических компонентов. Применяются инвазивные инструменты (сверла и др), ручные неинвазивные инструменты (в качестве вспомогательных) и приводные (при помощи соединения с другими инструментами). Выбор инструмента, определяется типом проводимой стоматологической манипуляции.

6. Риски в применении изделия, противопоказания, ожидаемые и предсказуемые побочные эффекты, связанные с применением медицинского изделия по назначению

Описание возможных рисков и потенциальных опасностей, связанных с условиями применения изделия, указано в выписке из ТФ производителя.

Противопоказания

- низкое качество и недостаточное количество костной ткани;
- плохая гигиена полости рта и патологическая инфекция альвеолярной кости.
- аллергия и повышенная чувствительность к титану (CP Ti Grade 4);
- неконтролируемая гипертензия, сахарный диабет;
- лейкемия, гемофилия, тромбопения;
- алкогольная зависимость, депрессия, шизофрения;
- лучевая терапия на челюсти.

Нежелательные реакции и возможные побочные эффекты

Возможные побочные реакции, связанные с использованием стоматологических имплантатов, могут включать следующее:

- Отторжение организмом;
- Прекращение интеграции в организм;
- Дегисценция, требующая костной пластики;
- Перфорация верхнечелюстной пазухи, нижней челюсти, назубной части протеза, лабиальной пластинки, нижнего альвеолярного канала, десны;

- Инфекции в форме: абсцесса, фистулы, нагноения, воспаления, рентгенопрозрачности;
- Неутихающая боль, онемение, парестезия;
- Гиперплазия;
- Чрезмерная потеря костной массы, требующая хирургического вмешательства;
- Перелом или трещина в имплантате;
- Системная инфекция;
- Травма нерва.

7. Обстоятельства, при которых пациент должен проконсультироваться со специалистом

- послеоперационные осложнения.
- онемение области нижней челюсти, околоносовой ткани верхней челюсти (временный или длительный характер).
- любая операция, связанная с вживлением имплантата, может сопровождаться осложнениями (локальная опухоль, кратковременная болезненность, отек, гематома или кровотечение).

В случае образования язвы в полости десны, а также в случае реакции ткани или инфекции требуется локальное лечение.

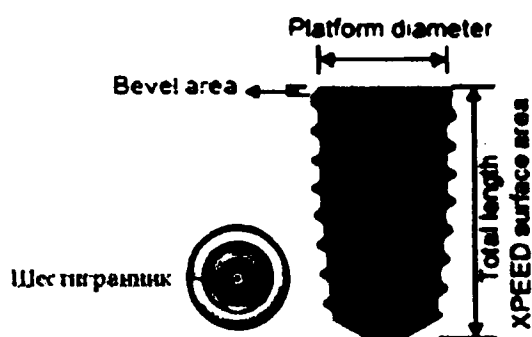
8. Предупреждение перед использованием

При выборе неправильного изделия (диаметр или высота) соединение между постоянной ортопедической конструкцией и имплантатом будет ненадежным и недолговременным и может потребовать замены. Неправильное использование изделия может привести к повреждению его компонентов и/или нанесению вреда пациенту.

9. Описание конструкции изделия, технические характеристики

9.1 Имплантаты дентальные (Dental Implants):

Имплантат представляет собой винтообразную опору для искусственной коронки зуба или съемного/несъемного протеза и изготовлены из чистого титана. Для дальнейшей остеоинтеграции имплантаты устанавливаются непосредственно в костную ткань верхней и/или нижней челюсти (с учетом качества и количества костной ткани), для фиксации дентального протеза (например, моста, отдельного зуба, покрывного протеза).



Где:

Platform diameter – диаметр платформы.

Bevel area – область фаски.



XPEED surface area – площадь поверхности XPEED.

Total length – общая длина.

Рисунок 1

Таблица 1. Специфические характеристики имплантата

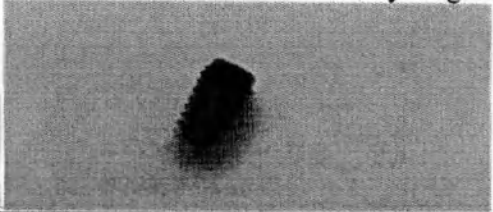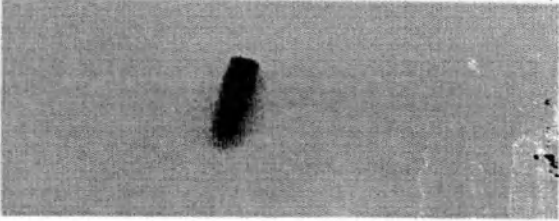
Специфические характеристики. Особенности.

Составные части изделия	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture) (далее - Имплантат XPEED AnyRidge®) 	Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture) (далее - Имплантат MiNi) 
Внутреннее конусное соединение и внутренний шестигранник	Эта область соединяется с наружным ортопедическим компонентом по типу холодной сварки, что обеспечивает плотное соединение. Внутренний шестигранник выполняет антиротационную функцию. Внутреннее конусное соединение имеет конус 5 градусов (на двух сторонах 10 градусов). Диаметр основания конуса (D1) составляет 3,1 мм и является неизменным.	Эта область соединяется с наружным ортопедическим компонентом по типу холодной сварки, что обеспечивает плотное соединение. Внутренний шестигранник выполняет антиротационную функцию. Внутреннее конусное соединение имеет конус 11 градусов (на двух сторонах 22 градуса). Диаметр основания конуса (D1) составляет 2,3 мм и является неизменным.
Внутренняя резьба	Эта область служит ложем для фиксирующего винта, который фиксирует ортопедический компонент. Имеет размер, подходящий для винта ортопедического компонента и за счет специальной обработки сохраняет высокие соединяющие характеристики. Имеет длину 4,7 мм от платформы и диаметр соответствующий диаметру резьбы M 1.8 x 0,35.	Эта область служит ложем для фиксирующего винта, который фиксирует ортопедический компонент. Имеет размер, подходящий для винта ортопедического компонента и за счет специальной обработки сохраняет высокие соединяющие характеристики. Имеет длину 5,3 мм от платформы и диаметр соответствующий диаметру резьбы M 1.4 x 0,3.
Платформа имплантата	В отличие от имплантатов с наружным соединением платформа не контактирует с ортопедическими компонентами. Но позволяет устранить слабые места благодаря внутреннему конусному соединению и наружной фаске, а также помогает определить глубину погружения относительно кортикальной пластинки кости. Размер (диаметр) у имплантатов для нормальной кости составляет от 3,5 до 4,5 мм, у имплантатов для низкой кости равен 5.0 мм.	В отличие от имплантатов с наружным соединением платформа не контактирует с ортопедическими компонентами. Но позволяет устранить слабые места благодаря внутреннему конусному соединению и наружной фаске, а также помогает определить глубину погружения относительно кортикальной пластинки кости. Размер (диаметр) у имплантатов для нормальной кости составляет от 2,6 мм до 2,8 мм.
Наружная фаска	Эта область перехода от платформы имплантата к резьбе. Предотвращает невозможность посадки абатмента вследствие наличия нависающих краев кости. Имеет различный размер в зависимости от резьбы имплантата. Диаметры фаски: 3,8 мм, 4,0 мм, 4,5 мм у имплантатов для нормальной кости и 5,5 мм у имплантатов для низкой кости. Высота фаски составляет 0,2 мм.	Эта область перехода от платформы имплантата к резьбе. Предотвращает невозможность посадки абатмента вследствие наличия нависающих краев кости. Имеет различный размер в зависимости от резьбы имплантата. Диаметры фаски: 2,8 мм, 3,2 мм. Высота фаски составляет 0,2 мм.
Резьба	Это область, благодаря которой достигается первичная стабилизация имплантата. Форма и шаг резьбы обусловлены целями: увеличение поверхности и равномерное	Это область, благодаря которой достигается первичная стабилизация имплантата. Форма и шаг резьбы обусловлены целями: увеличение поверхности и равномерное

	распределение окклюзионной нагрузки. Размер резьбы у имплантатов для нормальной кости составляет от 0,4 до 1,15 мм по длине с шагом резьбы 0,8 мм. Размер резьбы у имплантатов для низкой кости составляет от 0,65 до 1,65 мм по длине с шагом резьбы от 0,95 до 1,55 мм.	распределение окклюзионной нагрузки. Размер резьбы у имплантатов составляет от 0,4 до 1,15 мм по длине с шагом резьбы 0,8 мм.
Поверхность XPEED (Экспид)	Поверхность XPEED имеет микрошероховатость и наноструктуру поверхности. Эта поверхность получается путем пескоструйной обработки частицами оксида алюминия (Al_2O_3) с последующим протравливанием кислотой. Это позволяет достичь большей площади поверхности по сравнению с поверхностью RBM. Поверхность XPEED очищается от остатков кислоты щелочным раствором за счет реакции нейтрализации. Имеет синий цвет.	
Общая длина	Общая длина соответствует длине области, которая погружается в кость. В зависимости от резьбы имплантата составляет от 6,2 до 17,2 мм. Для клинических случаев с объемом костной ткани, не достаточным для установки имплантатов для нормальной кости, используются имплантаты с общей длиной 7 мм.	Общая длина соответствует длине области, которая погружается в кость. Имплантат применяется во фронтальном отделе нижней и верхней челюсти, когда имплантат стандартного диаметра невозможно установить из-за возможной нехватки объема костного гребня. Общая длина имплантата составляет от 8,0 до 14,5 мм.

- Имплантат XPEED AnyRidge® - применяется для нормальной кости

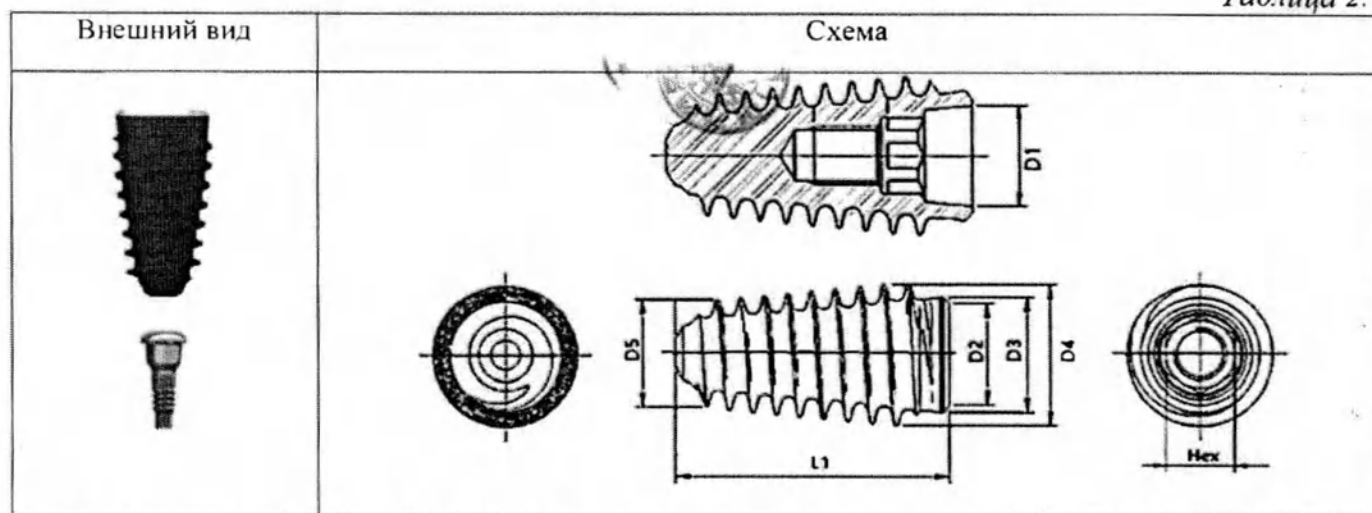Таблица 2.



Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм						Hex (внутренний шестигранник) (+0.01)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр основания конусного соединения (±0.02)	D2 (диаметр платформы) (±0.02)	D3 (диаметр фаски) (±0.02)	D4 (общий диаметр) (±0.05)	D5 (апикальный диаметр) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)		
Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX3507	3.10	3.50	3.80	4.00	2.70	6.20	2.31	XPEED
	FANIHX3508	3.10	3.50	3.80	4.00	2.70	7.70	2.31	XPEED
	FANIHX3510	3.10	3.50	3.80	4.00	2.70	9.20	2.31	XPEED
	FANIHX3511	3.10	3.50	3.80	4.00	2.70	10.70	2.31	XPEED
	FANIHX3513	3.10	3.50	3.80	4.00	2.70	12.20	2.31	XPEED
	FANIHX3515	3.10	3.50	3.80	4.00	2.70	14.20	2.31	XPEED
	FANIHX3518	3.10	3.50	3.80	4.00	2.70	17.20	2.31	XPEED
	FANIHX4007	3.10	3.50	4.00	4.40	3.00	6.20	2.31	XPEED
	FANIHX4008	3.10	3.50	4.00	4.40	3.00	7.70	2.31	XPEED
	FANIHX4010	3.10	3.50	4.00	4.40	3.00	9.20	2.31	XPEED
	FANIHX4011	3.10	3.50	4.00	4.40	3.00	10.70	2.31	XPEED
	FANIHX4013	3.10	3.50	4.00	4.40	3.00	12.20	2.31	XPEED
	FANIHX4015	3.10	3.50	4.00	4.40	3.00	14.20	2.31	XPEED

FANIHX4018	3.10	3.50	4.00	4.40	3.00	17.20	2.31	XPEED
FANIHX4507	3.10	3.50	4.00	4.90	3.50	6.20	2.31	XPEED
FANIHX4508	3.10	3.50	4.00	4.90	3.50	7.70	2.31	XPEED
FANIHX4510	3.10	3.50	4.00	4.90	3.50	9.20	2.31	XPEED
FANIHX4511	3.10	3.50	4.00	4.90	3.50	10.70	2.31	XPEED
FANIHX4513	3.10	3.50	4.00	4.90	3.50	12.20	2.31	XPEED
FANIHX4515	3.10	3.50	4.00	4.90	3.50	14.20	2.31	XPEED
FANIHX4518	3.10	3.50	4.00	4.90	3.50	17.20	2.31	XPEED
FANIHX5007	3.10	3.50	4.00	5.40	4.00	6.20	2.31	XPEED
FANIHX5008	3.10	3.50	4.00	5.40	4.00	7.70	2.31	XPEED
FANIHX5010	3.10	3.50	4.00	5.40	4.00	9.20	2.31	XPEED
FANIHX5011	3.10	3.50	4.00	5.40	4.00	10.70	2.31	XPEED
FANIHX5013	3.10	3.50	4.00	5.40	4.00	12.20	2.31	XPEED
FANIHX5015	3.10	3.50	4.00	5.40	4.00	14.20	2.31	XPEED
FANIHX5018	3.10	3.50	4.00	5.40	4.00	17.20	2.31	XPEED
FANIHX5507	3.10	3.50	4.00	5.90	4.50	6.20	2.31	XPEED
FANIHX5508	3.10	3.50	4.00	5.90	4.50	7.70	2.31	XPEED
FANIHX5510	3.10	3.50	4.00	5.90	4.50	9.20	2.31	XPEED
FANIHX5511	3.10	3.50	4.00	5.90	4.50	10.70	2.31	XPEED
FANIHX5513	3.10	3.50	4.00	5.90	4.50	12.20	2.31	XPEED
FANIHX5515	3.10	3.50	4.00	5.90	4.50	14.20	2.31	XPEED
FANIHX5518	3.10	3.50	4.00	5.90	4.50	17.20	2.31	XPEED
FALIHX6007	3.10	5.00	5.50	6.40	5.00	6.40	2.31	XPEED
FALIHX6008	3.10	5.00	5.50	6.40	5.00	7.90	2.31	XPEED
FALIHX6010	3.10	5.00	5.50	6.40	5.00	9.40	2.31	XPEED
FALIHX6011	3.10	5.00	5.50	6.40	5.00	10.90	2.31	XPEED
FALIHX6013	3.10	5.00	5.50	6.40	5.00	12.40	2.31	XPEED
FALIHX6507	3.10	5.00	5.50	6.90	5.50	6.40	2.31	XPEED
FALIHX6508	3.10	5.00	5.50	6.90	5.50	7.90	2.31	XPEED
FALIHX6510	3.10	5.00	5.50	6.90	5.50	9.40	2.31	XPEED
FALIHX6511	3.10	5.00	5.50	6.90	5.50	10.90	2.31	XPEED
FALIHX6513	3.10	5.00	5.50	6.90	5.50	12.40	2.31	XPEED
FALIHX7007	3.10	5.00	5.50	7.40	6.00	6.40	2.31	XPEED
FALIHX7008	3.10	5.00	5.50	7.40	6.00	7.90	2.31	XPEED
FALIHX7010	3.10	5.00	5.50	7.40	6.00	9.40	2.31	XPEED
FALIHX7011	3.10	5.00	5.50	7.40	6.00	10.90	2.31	XPEED
FALIHX7013	3.10	5.00	5.50	7.40	6.00	12.40	2.31	XPEED
FALIHX7507	3.10	5.00	5.50	7.90	6.50	6.40	2.31	XPEED
FALIHX7508	3.10	5.00	5.50	7.90	6.50	7.90	2.31	XPEED
FALIHX7510	3.10	5.00	5.50	7.90	6.50	9.40	2.31	XPEED
FALIHX7511	3.10	5.00	5.50	7.90	6.50	10.90	2.31	XPEED
FALIHX7513	3.10	5.00	5.50	7.90	6.50	12.40	2.31	XPEED
FALIHX8007	3.10	5.00	5.50	8.40	7.00	6.40	2.31	XPEED
FALIHX8008	3.10	5.00	5.50	8.40	7.00	7.90	2.31	XPEED
FALIHX8010	3.10	5.00	5.50	8.40	7.00	9.40	2.31	XPEED
FALIHX8011	3.10	5.00	5.50	8.40	7.00	10.90	2.31	XPEED
FALIHX8013	3.10	5.00	5.50	8.40	7.00	12.40	2.31	XPEED
AR384507	3.10	4.00	4.50	4.90	3.50	6.20	2.31	XPEED
AR384508	3.10	4.00	4.50	4.90	3.50	7.70	2.31	XPEED
AR384510	3.10	4.00	4.50	4.90	3.50	9.20	2.31	XPEED
AR384511	3.10	4.00	4.50	4.90	3.50	10.7	2.31	XPEED
AR384513	3.10	4.00	4.50	4.90	3.50	12.2	2.31	XPEED
AR384515	3.10	4.00	4.50	4.90	3.50	14.2	2.31	XPEED
AR384518	3.10	4.00	4.50	4.90	3.50	17.2	2.31	XPEED
AR385007	3.10	4.00	4.50	5.40	4.00	6.20	2.31	XPEED
AR385008	3.10	4.00	4.50	5.40	4.00	7.70	2.31	XPEED
AR385010	3.10	4.00	4.50	5.40	4.00	9.20	2.31	XPEED
AR385011	3.10	4.00	4.50	5.40	4.00	10.7	2.31	XPEED
AR385013	3.10	4.00	4.50	5.40	4.00	12.2	2.31	XPEED
AR385015	3.10	4.00	4.50	5.40	4.00	14.2	2.31	XPEED
AR385018	3.10	4.00	4.50	5.40	4.00	17.2	2.31	XPEED
AR435007	3.10	4.50	5.00	5.40	4.00	6.20	2.31	XPEED
AR435008	3.10	4.50	5.00	5.40	4.00	7.70	2.31	XPEED
AR435010	3.10	4.50	5.00	5.40	4.00	9.20	2.31	XPEED
AR435011	3.10	4.50	5.00	5.40	4.00	10.7	2.31	XPEED
AR435013	3.10	4.50	5.00	5.40	4.00	12.2	2.31	XPEED
AR435015	3.10	4.50	5.00	5.40	4.00	14.2	2.31	XPEED
AR435018	3.10	4.50	5.00	5.40	4.00	17.2	2.31	XPEED
AR385507	3.10	4.00	4.50	5.90	4.50	6.20	2.31	XPEED
AR385508	3.10	4.00	4.50	5.90	4.50	7.70	2.31	XPEED

AR385510	3.10	4.00	4.50	5.90	4.50	9.20	2.31	XPEED
AR385511	3.10	4.00	4.50	5.90	4.50	10.7	2.31	XPEED
AR385513	3.10	4.00	4.50	5.90	4.50	12.2	2.31	XPEED
AR385515	3.10	4.00	4.50	5.90	4.50	14.2	2.31	XPEED
AR385518	3.10	4.00	4.50	5.90	4.50	17.2	2.31	XPEED
AR435507	3.10	4.50	5.00	5.90	4.50	6.20	2.31	XPEED
AR435508	3.10	4.50	5.00	5.90	4.50	7.70	2.31	XPEED
AR435510	3.10	4.50	5.00	5.90	4.50	9.20	2.31	XPEED
AR435511	3.10	4.50	5.00	5.90	4.50	10.7	2.31	XPEED
AR435513	3.10	4.50	5.00	5.90	4.50	12.2	2.31	XPEED
AR435515	3.10	4.50	5.00	5.90	4.50	14.2	2.31	XPEED
AR435518	3.10	4.50	5.00	5.90	4.50	17.2	2.31	XPEED
AR436007	3.10	4.50	5.00	6.40	5.00	6.20	2.31	XPEED
AR436008	3.10	4.50	5.00	6.40	5.00	7.70	2.31	XPEED
AR436010	3.10	4.50	5.00	6.40	5.00	9.20	2.31	XPEED
AR436011	3.10	4.50	5.00	6.40	5.00	10.7	2.31	XPEED
AR436013	3.10	4.50	5.00	6.40	5.00	12.2	2.31	XPEED
AR485507	3.10	5.00	5.50	5.90	4.50	6.40	2.31	XPEED
AR485508	3.10	5.00	5.50	5.90	4.50	7.90	2.31	XPEED
AR485510	3.10	5.00	5.50	5.90	4.50	9.40	2.31	XPEED
AR485511	3.10	5.00	5.50	5.90	4.50	10.9	2.31	XPEED
AR485513	3.10	5.00	5.50	5.90	4.50	12.4	2.31	XPEED
AR485515	3.10	5.00	5.50	5.90	4.50	14.4	2.31	XPEED
Винт-заглушка входит в состав упаковки								
Масса – не более 1.205 г.								

- Имплантат XPEED AnyRidge® - имеет специальную длину для установки в низкую кость.

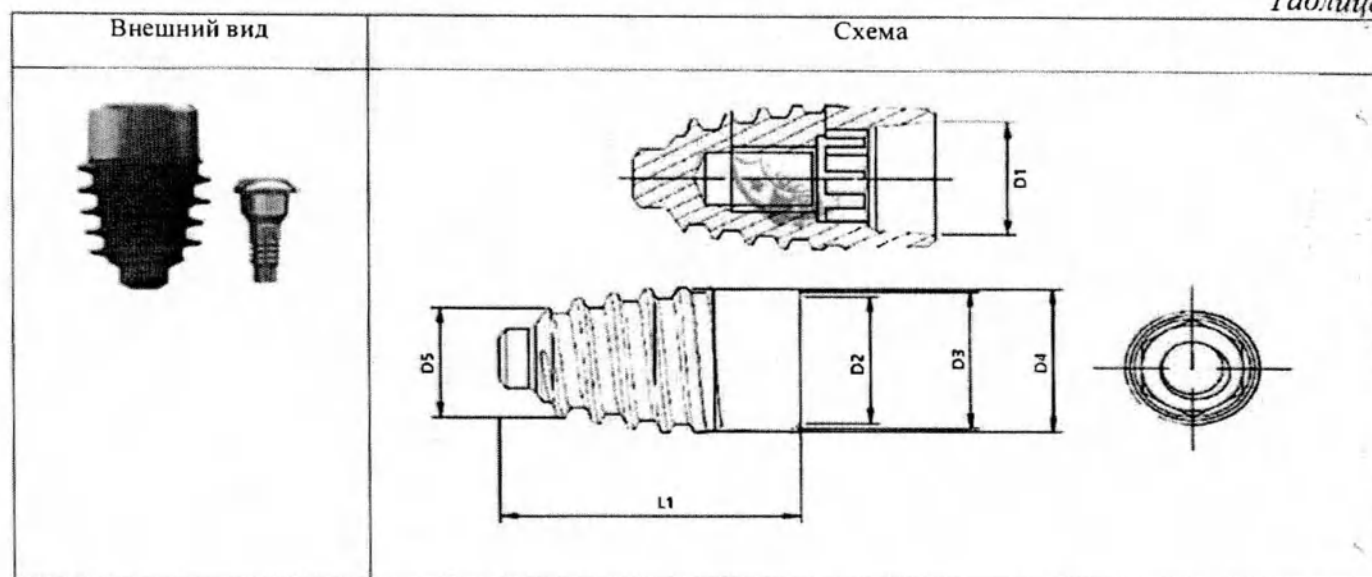Таблица 3.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер детали: мм						Hex (внутренний шестигранник) (+0.01)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр основания конусного соединения) (допуск -0.02)	D2 (диаметр платформы) (допуск -0.02)	D3 (диаметр фаски) (допуск -0.02)	D4 (общий диаметр) (допуск ±0.05)	D5 (апикальный диаметр p (±0.05)	L1 (общая длина) (допуск ±0.01)		
Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR333505	3.1	3.5	3.8	4.0	2.70	7.0	2.31	XPEED
	AR334005	3.1	3.5	4.0	4.4	3.00	7.0	2.31	XPEED
	AR334505	3.1	3.5	4.0	4.9	3.50	7.0	2.31	XPEED
	AR384505	3.1	4.0	4.5	4.9	3.50	7.0	2.31	XPEED
	AR335005	3.1	3.5	4.0	5.4	4.00	7.0	2.31	XPEED
	AR385005	3.1	4.0	4.5	5.4	4.00	7.0	2.31	XPEED
	AR435005	3.1	4.5	5.0	5.4	4.00	7.0	2.31	XPEED
	AR335505	3.1	3.5	4.0	5.9	4.50	7.0	2.31	XPEED
	AR385505	3.1	4.0	4.5	5.9	4.50	7.0	2.31	XPEED
	AR435505	3.1	4.5	5.0	5.9	4.50	7.0	2.31	XPEED
	AR485505	3.1	5.0	5.5	5.9	4.50	7.0	2.31	XPEED
Винт-заглушка входит в состав упаковки									

- Имплантат MiNi – применяется для нормальной и низкой кости фронтального отдела челюсти при сохранении принципа биологической ширины.

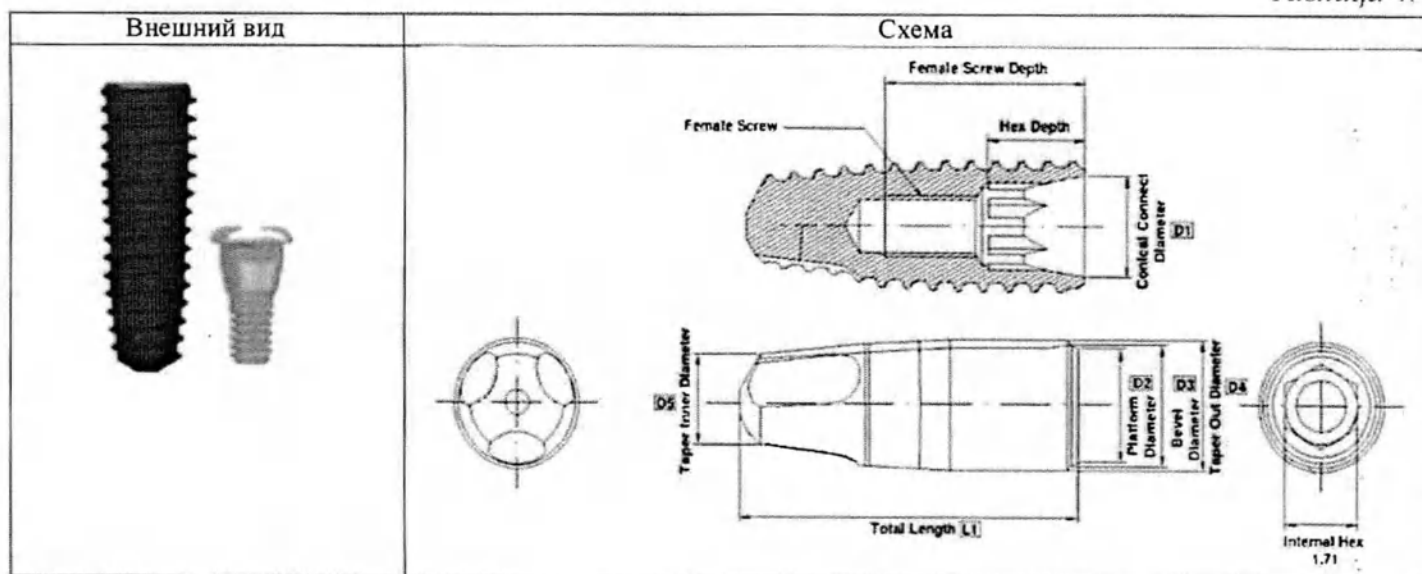Таблица 4.



Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм					Hex (Внутренний шестигранник) (+0.01)	Поверхность
		D1 (диаметр Основания конусного соединения) (- 0.02)	D2 (диаметр платформы) (-0.02)	D3 (диаметр фаски) (-0.02)	D4 (общий диаметр) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.01) (±0.05)		
Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)	MIIF3008	2.31	2.60	2.80	3.00	8.00	2.31 1.71	XPEED
	MIIF3010	2.31	2.60	2.80	3.00	9.00 9.50	2.31 1.71	XPEED
	MIIF3011	2.31	2.60	2.80	3.00	11.00	2.31 1.71	XPEED
	MIIF3013	2.31	2.60	2.80	3.00	12.50	2.31 1.71	XPEED
	MIIF3015	2.31	2.60	2.80	3.00	14.50	2.31 1.71	XPEED
	MIIF3308	2.31	2.80	3.20	3.00	8.00	2.31 1.71	XPEED
	MIIF3310	2.31	2.80	3.20	3.00	9.00 9.50	2.31 1.71	XPEED
	MIIF3311	2.31	2.80	3.20	3.00	11.00	2.31 1.71	XPEED
	MIIF3313	2.31	2.80	3.20	3.00	12.50	2.31 1.71	XPEED
	MIIF3315	2.31	2.80	3.20	3.00	14.50	2.31 1.71	XPEED
Винт-заглушка входит в состав упаковки								
Масса – не более 0.361 г								

9.2 Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)








Мембрана i-Gen используется для направленной регенерации кости вокруг имплантата при его установке, восстанавливая горизонтальный и вертикальный объем костной ткани.

Изделие выпускается различной формы и размеров. Мембраны i-Gen бывают:

- Одиночная, тип А: IG1W4509, IG1W5510, IG1W6511.
- Одиночная двухстеночная, тип В: IG2W0918, IG2W1120, IG2W1323.
- Одиночная трехстеночная, тип С: IG3W0921, IG3W1125, IG3W1328.

В имплантат устанавливается Винт i-Gen, после размещения костного материала вокруг имплантата, где необходимо, на винт устанавливается мембрана i-Gen, которая защищает костный материал. Мембрана фиксируется винтом-заглушкой i-Gen или Формирователем десны для плоского абатмента на время восстановления пациента. Для вертикальной аугментации рекомендуется использовать плоский абатмент.

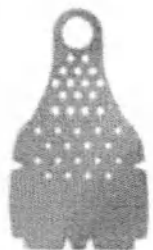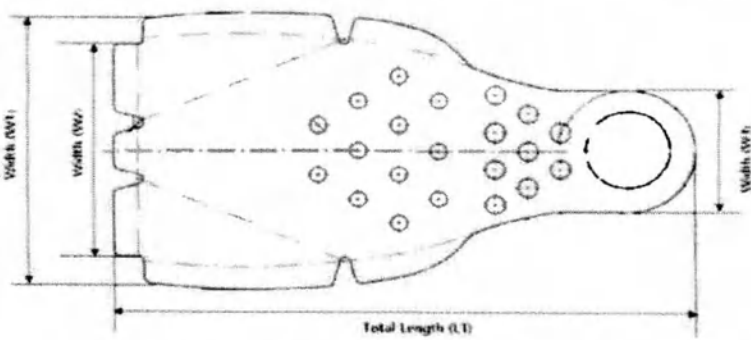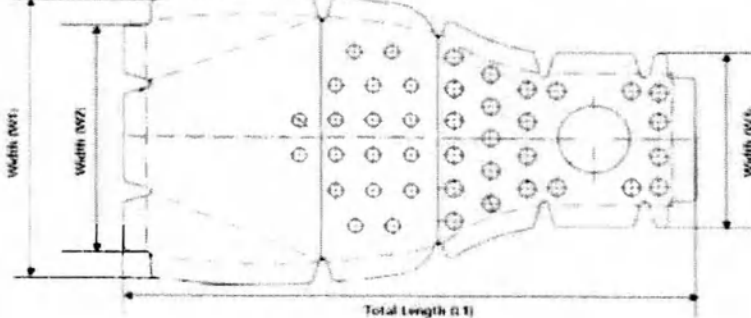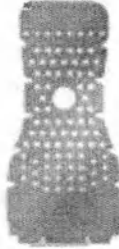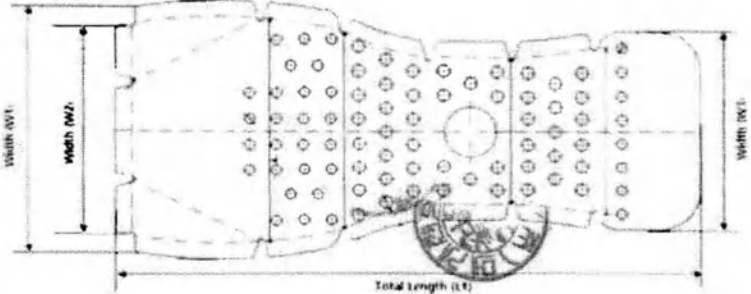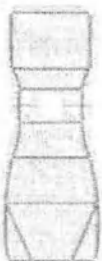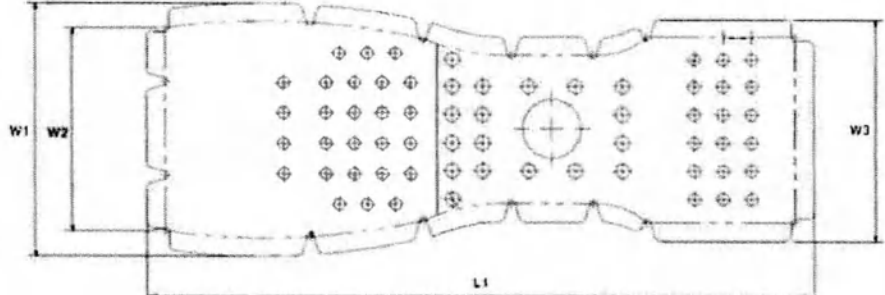Таблица 5.

 IG1W4509	
 IG2W1120	
 IG3W1328	
 IG4W1128	

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Обработка поверхности
		W1 (щечная ширина 1) (±0.05)	W2 (щечная ширина 2) (±0.05)	W3 (щечная ширина 3) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	
Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)	IG1W4509	9.00	7.20	4.00	17.45	Машинная
	IG1W5510	10.00	8.20	4.00	18.45	Машинная
	IG1W6511	11.00	9.10	4.00	19.45	Машинная
	IG2W0918	9.00	6.80	5.10	18.00	Машинная
	IG2W1120	11.00	8.80	6.50	20.00	Машинная
	IG2W1323	13.00	10.70	9.00	23.00	Машинная
	IG3W0921	9.00	6.80	6.00	21.50	Машинная
	IG3W1125	11.00	8.80	8.00	25.00	Машинная

	IG3W1328	13.00	10.70	10.00	28.00	Машинная
	IG4W1128	11.00	8.80	9.60	28.34	Машинная
	Масса – не более 0.223 г.					


9.3 Характеристики компонентов ортопедических указаны в таблицах 6:48.

Ортопедические компоненты созданы для изготовления ортопедических конструкций с опорой на имплантаты.

1) Абатмент временный (Temporary Abutment)

Временный абатмент AANTMN4012 и AANTMH4012, служит в соединении с Имплантатом XPEED AnyRidge® для фиксации временной пластмассовой коронки. Временный абатмент из титанового сплава имеет ребристую поверхность в верхней части для лучшей фиксации пластмассы или воска.

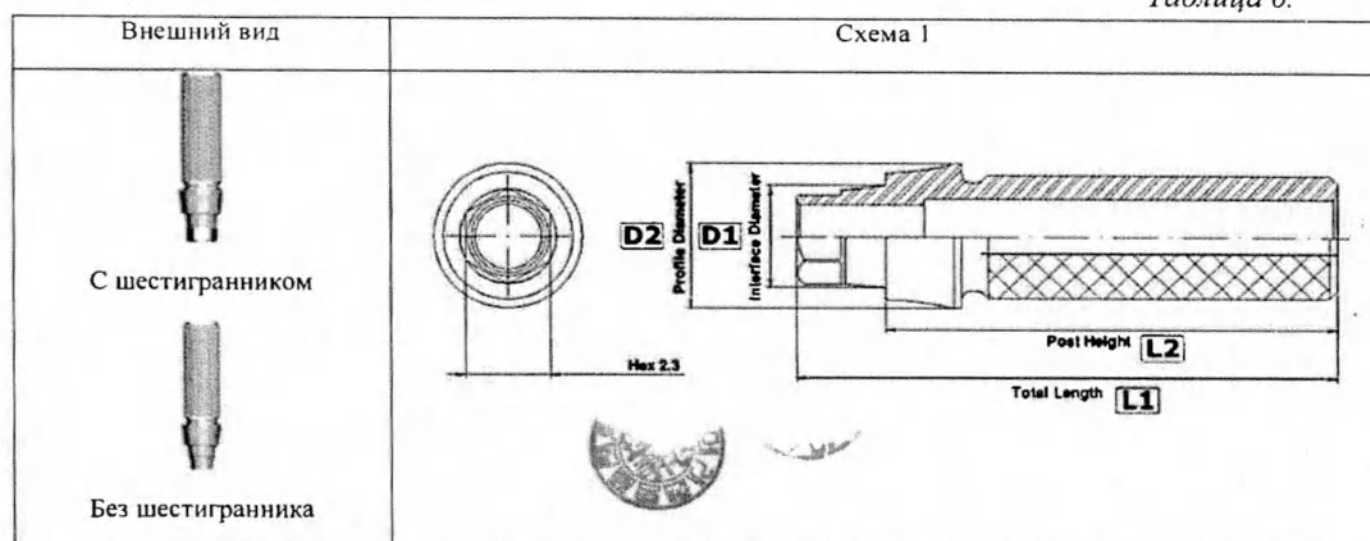Таблица 6.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Hex (внешний шестигранник) (-0.01)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр интерфейса) (-0.02)	D2 (диаметр профиля) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота ответной части) (±0.05)		
Абатмент временный (Temporary Abutment)	AANTMN4012	2.8	4.0	14.4	12.0	Н/Д	Машинная
	AANTMH4012	2.8	4.0	14.4	12.0	2.3	Машинная
Винт Multi Post (Multi Post Screw) AANMSF входит в состав упаковки							
Масса – не более 0.330 г.							

- Абатмент временный MITA3012H используется в соединении с Имплантатом MiNi для фиксации временных конструкций. Имеет ребристую поверхность в верхней части для лучшей ретенции пластмассы или воска.

Внешний вид	Схема 2
-------------	---------

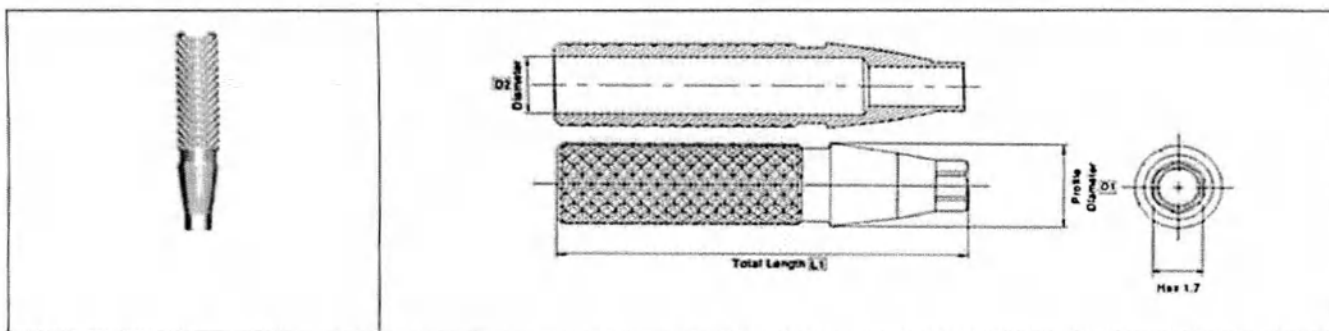


Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Hex (внешний шестигранный) (± 0.05)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр профиля) (± 0.05)	D2 (диаметр шахты винта) (± 0.05)	L1 (общая длина) (-0.02)		
Абатмент временный (Temporary Abutment)	MITA3012H	3.00	1.80	14.20	1.70	Машинная
	Винт абатмента (Abutment screw) MIA514 входит в состав упаковки					
	Масса – не более 0.186 г.					

2) Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)

Абатмент EZ Post устанавливается на Имплантат XPEED AnyRidge® и закрепляется винтом для дальнейшей фиксации финальной реставрации (протеза) с цементной или винтовой фиксацией.

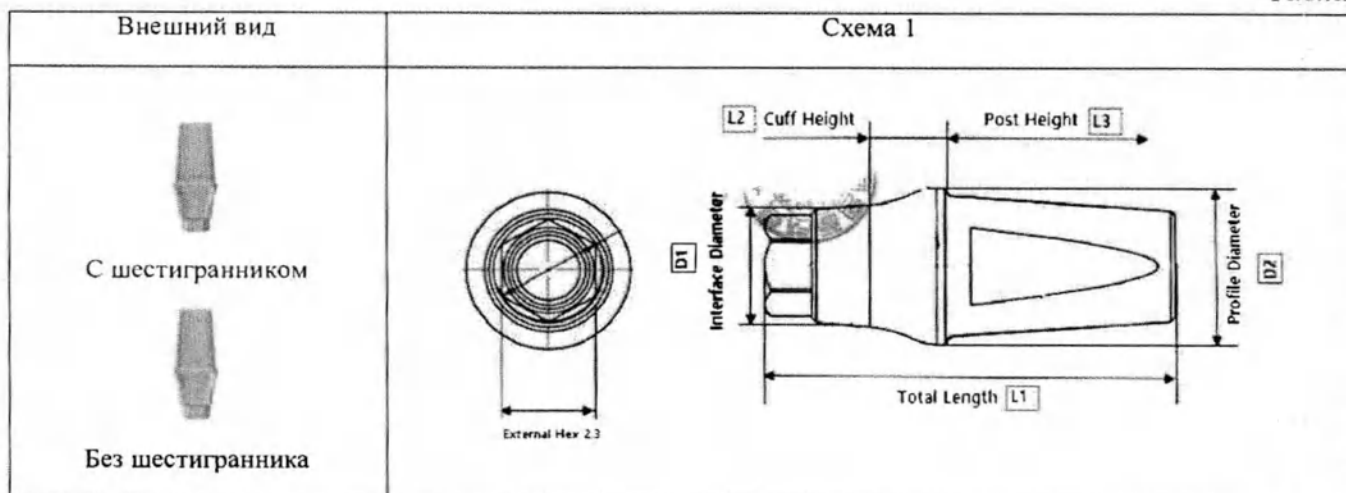Таблица 7.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, mm						Цвет анодизации
		D1 (диаметр интерфейса) (+0.02)	D2 (диаметр профиля) (-0.05/- 0.08)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (высота десны) (± 0.05)	L3 (высота ответной части) (± 0.05)	Hex (внешний шестигранный) (-0.01)	
Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment) (Hex)	AANEPH4025	3.135	4.00	9.90	1.80	5.50	2.30	Золотистый
	AANEPH4035	3.135	4.00	10.90	2.80	5.50	2.30	Золотистый
	AANEPH4045	3.135	4.00	11.90	3.80	5.50	2.30	Золотистый
	AANEPH4055	3.135	4.00	12.90	4.80	5.50	2.30	Золотистый
	AANEPH5025	3.135	5.00	9.90	1.80	5.50	2.30	Золотистый
	AANEPH5035	3.135	5.00	10.90	2.80	5.50	2.30	Золотистый
	AANEPH5045	3.135	5.00	11.90	3.80	5.50	2.30	Золотистый
	AANEPH5055	3.135	5.00	12.90	4.80	5.50	2.30	Золотистый
	AANEPH6025	3.135	6.00	9.90	1.80	5.50	2.30	Золотистый
	AANEPH6035	3.135	6.00	10.90	2.80	5.50	2.30	Золотистый
	AANEPH6045	3.135	6.00	11.90	3.80	5.50	2.30	Золотистый
	AANEPH6055	3.135	6.00	12.90	4.80	5.50	2.30	Золотистый
	AANEPH7025	3.135	7.00	9.90	1.80	5.50	2.30	Золотистый
	AANEPH7035	3.135	7.00	10.90	2.80	5.50	2.30	Золотистый
	AANEPH7045	3.135	7.00	11.90	3.80	5.50	2.30	Золотистый

	AANEPH7055	3.135	7.00	12.90	4.80	5.50	2.30	Золотистый
	AANEPH4027	3.135	4.00	11.40	1.80	7.00	2.30	Золотистый
	AANEPH4037	3.135	4.00	12.40	2.80	7.00	2.30	Золотистый
	AANEPH4047	3.135	4.00	13.40	3.80	7.00	2.30	Золотистый
	AANEPH4057	3.135	4.00	14.40	4.80	7.00	2.30	Золотистый
	AANEPH5027	3.135	5.00	11.40	1.80	7.00	2.30	Золотистый
	AANEPH5037	3.135	5.00	12.40	2.80	7.00	2.30	Золотистый
	AANEPH5047	3.135	5.00	13.40	3.80	7.00	2.30	Золотистый
	AANEPH5057	3.135	5.00	14.40	4.80	7.00	2.30	Золотистый
	AANEPH6027	3.135	6.00	11.40	1.80	7.00	2.30	Золотистый
	AANEPH6037	3.135	6.00	12.40	2.80	7.00	2.30	Золотистый
	AANEPH6047	3.135	6.00	13.40	3.80	7.00	2.30	Золотистый
	AANEPH6057	3.135	6.00	14.40	4.80	7.00	2.30	Золотистый
	AANEPH7027	3.135	7.00	11.40	1.80	7.00	2.30	Золотистый
	AANEPH7037	3.135	7.00	12.40	2.80	7.00	2.30	Золотистый
	AANEPH7047	3.135	7.00	13.40	3.80	7.00	2.30	Золотистый
	AANEPH7057	3.135	7.00	14.40	4.80	7.00	2.30	Золотистый
Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment) (Non-hex)	AANEPN4025	3.135	4.00	9.90	1.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN4035	3.135	4.00	10.90	2.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN4045	3.135	4.00	11.90	3.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN4055	3.135	4.00	12.90	4.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN5025	3.135	5.00	9.90	1.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN5035	3.135	5.00	10.90	2.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN5045	3.135	5.00	11.90	3.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN5055	3.135	5.00	12.90	4.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN6025	3.135	6.00	9.90	1.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN6035	3.135	6.00	10.90	2.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN6045	3.135	6.00	11.90	3.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN6055	3.135	6.00	12.90	4.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN7025	3.135	7.00	9.90	1.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN7035	3.135	7.00	10.90	2.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN7045	3.135	7.00	11.90	3.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN7055	3.135	7.00	12.90	4.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AANEPN4027	3.135	4.00	11.40	1.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AANEPN4037	3.135	4.00	12.40	2.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AANEPN4047	3.135	4.00	13.40	3.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AANEPN4057	3.135	4.00	14.40	4.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AANEPN5027	3.135	5.00	11.40	1.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AANEPN5037	3.135	5.00	12.40	2.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AANEPN5047	3.135	5.00	13.40	3.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AANEPN5057	3.135	5.00	14.40	4.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AANEPN6027	3.135	6.00	11.40	1.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AANEPN6037	3.135	6.00	12.40	2.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AANEPN6047	3.135	6.00	13.40	3.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AANEPN6057	3.135	6.00	14.40	4.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AANEPN7027	3.135	7.00	11.40	1.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AANEPN7037	3.135	7.00	12.40	2.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AANEPN7047	3.135	7.00	13.40	3.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AANEPN7057	3.135	7.00	14.40	4.80	7.00	Н/Д	Золотистый
В состав упаковки входят 2 Винта Multi Post (Multi Post Screw) AANMSF, AANMST								
Масса не более 0,216 г.								

- Абатмент EZ Post моделей MIER3505H, MIER3515H, MIER3525H, MIER3535H, MIER3545H, MIER3507H, MIER3517H, MIER3527H, MIER3537H, MIER3547H устанавливается на Имплантат MiNi и закрепляется винтом для дальнейшей фиксации финальной реставрации (протеза) с цемент-ной или винтовой фиксацией.

Внешний вид	Схема 2
-------------	---------

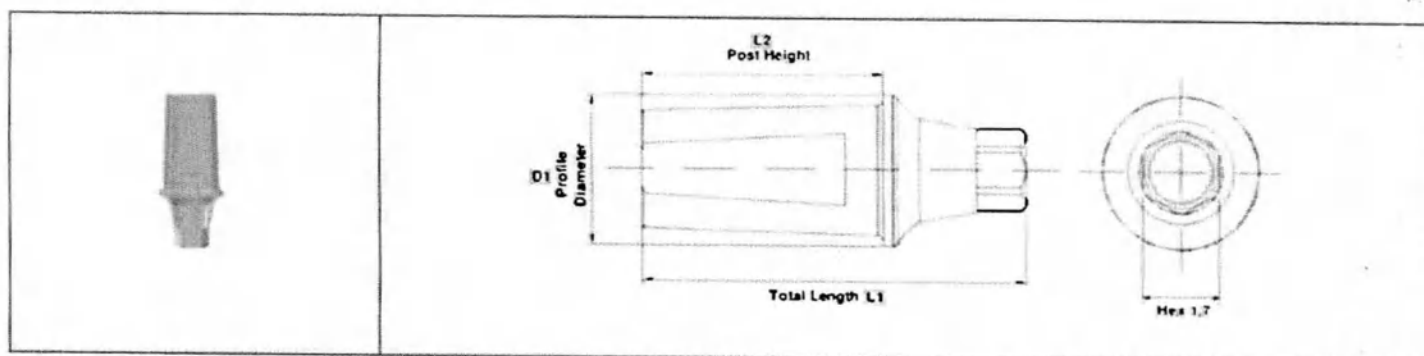


Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Нех (внешний шестигранник) (-0.01)	Цвет анодизации
		D1 (диаметр профиля) (-0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (высота ответной части) (-0.02)		
Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	MIER3505H	3.50	8.70	5.50	1.70	Золотистый
	MIER3515H	3.50	9.20	5.50	1.70	Золотистый
	MIER3525H	3.50	10.20	5.50	1.70	Золотистый
	MIER3535H	3.50	11.20	5.50	1.70	Золотистый
	MIER3545H	3.50	12.20	5.50	1.70	Золотистый
	MIER3507H	3.50	10.20	7.00	1.70	Золотистый
	MIER3517H	3.50	10.70	7.00	1.70	Золотистый
	MIER3527H	3.50	11.70	7.00	1.70	Золотистый
	MIER3537H	3.50	12.70	7.00	1.70	Золотистый
	MIER3547H	3.50	13.70	7.00	1.70	Золотистый
Винт абатмента (Abutment Screw) MIAS14 входит в состав упаковки						
Масса – не более 0.216г.						

3) Абатмент ССМ (CCM Abutment)

Используется для изготовления полноанатомической коронки с винтовой фиксацией или индивидуального абатмента с последующим креплением к коронке с цементной фиксацией. Ответная часть абатмента имеет ребристую поверхность для лучшей фиксации воска.

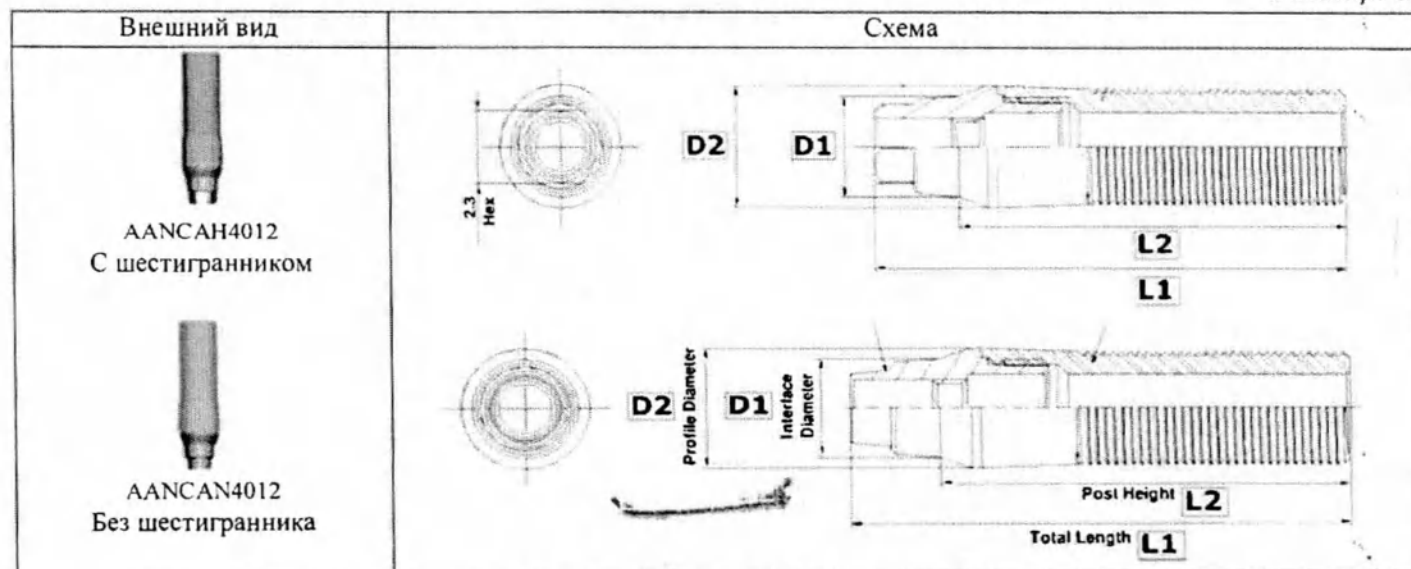Таблица 8.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Н (внешний шестигранный) (-0.01)	Цвет маркировки
		D1 (диаметр интерфейса) (-0.03)	D2 (общий диаметр) (± 0.05)	L1 (общая высота) (± 0.05)	L2 (высота ответной части) (± 0.05)		
Абатмент ССМ (CCM Abutment)	AANCAN4012	3.135	3.80	14.70	12.10	Н/Д	Желтый
	AANCAN4012	3.135	3.80	14.70	12.10	2.30	Розовый
	В состав упаковки входят 2 Винта Multi Post (Multi Post Screw) AANMSF, AANMST						
	Масса – не более 0.521 г.						

4) Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment)

Используется для изготовления постоянных и временных реставраций с винтовой фиксацией. Абатмент Multi-unit переносится на имплантат с помощью Инструмента для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier) MUASC. На абатменте при помощи винта фиксируется колпачок предохраняющий, слепочный трансфер, цилиндры (временный, ССМ, титановое основание).

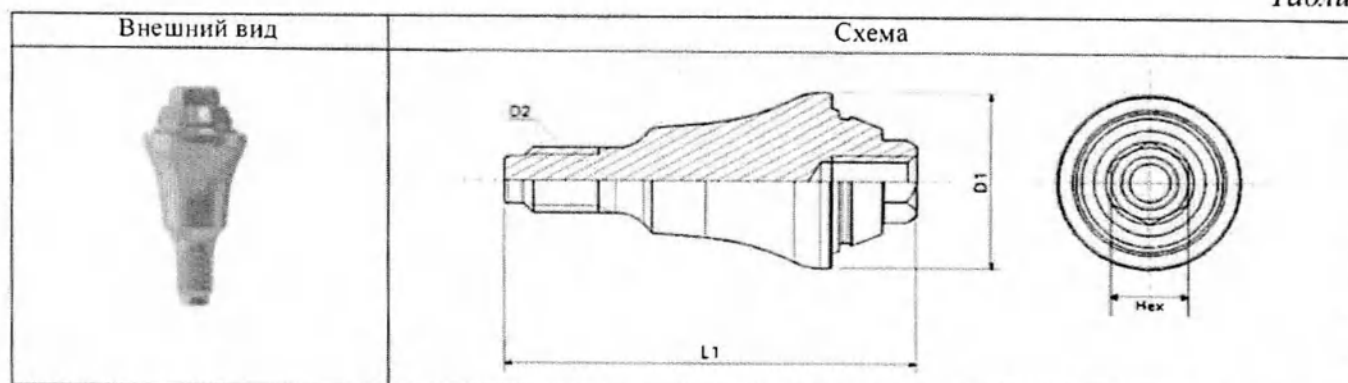Таблица 9.



Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Цвет анодизации
		D1 (диаметр профиля) (-0.05)	D2 (диаметр наружной резьбы) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	Hex (внешний шестигранник) (-0.02)	
Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment)	MUAARN0015	4.8	M1.80x0.35P	8.75	2.0	Золотистый
	MUAARN0025	4.8	M1.80x0.35P	9.75	2.0	Золотистый
	MUAARN0035	4.8	M1.80x0.35P	10.75	2.0	Золотистый
	MUAARN0045	4.8	M1.80x0.35P	11.75	2.0	Золотистый
	В состав упаковки входит Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier) MUASC					
Масса – не более 0,665 г.						

5) Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)

Используется в соединении с имплантатом для фиксации временной или финальной реставрации с винтовой фиксацией и коррекции угла наклона ортопедической конструкции относительно имплантата. Угол наклона абатмента 17° или 30°. Он состоит из двух частей и соединяется с имплантатом с помощью винта мульти-юнит абатмента. На верхнюю часть крепятся защитный колпачок, слепочный трансфер или цилиндры (временный цилиндр, цилиндр ССМ, титановое основание) для фиксации постоянных или временных протезов. Абатмент Multi-unit угловой переносится на имплантат с помощью Инструмента для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier) MUAAC.


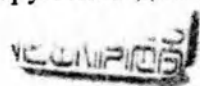


Таблица 10.

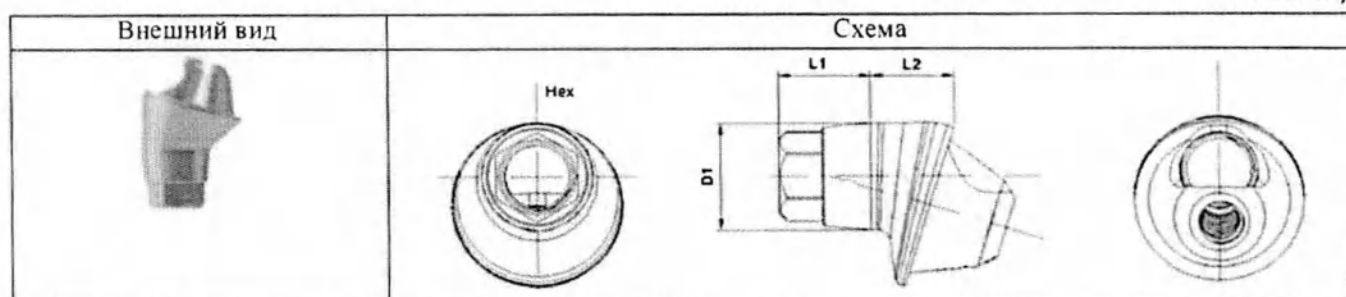

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм	Hex (внешний)	Угол	Цвет
--------------	--------	------------	---------------	------	------

изделия		D1(диаметр профиля) (+0.02)	L1(длина соединения) (±0.05)	L2 (высота десны) (±0.05)	шестигранник) (-0.01)		анодизации
Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)	MUAARH1725	3,135	2,6	2,3	2,3	17	Золотистый
	MUAARH1735	3,135	2,6	3,3	2,3		Золотистый
	MUAARH1745	3,135	2,6	4,3	2,3		Золотистый
	MUAARN1725	3,135	2,6	2,3	Н/Д		Золотистый
	MUAARN1735	3,135	2,6	3,3	Н/Д		Золотистый
	MUAARN1745	3,135	2,6	4,3	Н/Д		Золотистый
	MUAARH3035	3,135	2,4	3,5	2,3	30	Золотистый
	MUAARH3045	3,135	2,4	4,5	2,3		Золотистый
	MUAARN3035	3,135	2,4	3,5	Н/Д		Золотистый
	MUAARN3045	3,135	2,4	4,5	Н/Д		Золотистый
В состав упаковки входят 2 Винта абатмента Multi-unit (Multi-unit Abutment Screw) MUAARSF, MUAARST, Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier) MUAAC							
Масса – не более 0,363 г.							

6) Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)

Используется для создания индивидуального уступа по краю десны с помощью ручного фрезерования ответной части абатмента согласно окклюзионной плоскости зубов. Фиксируется на имплантате XPEED AnyRidge®.

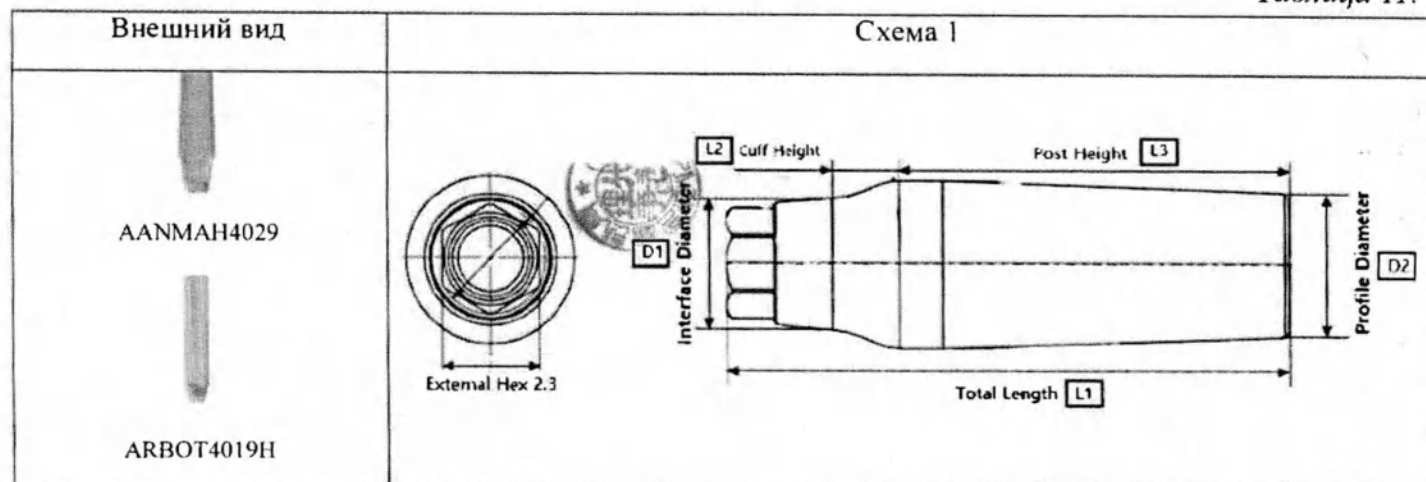Таблица 11.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм						Цвет анодизации
		D1 (диаметр интерфейса) (+0.02)	D2 (диаметр профиля) (-0.05/-0.08)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (высота десны) (± 0.05)	L3 (высота ответной части) (± 0.05)	Hex (внешний шестигранник) (-0.01)	
Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH4029	3.135	4.0	13.4	1.8	9.2	2.30	Золотистый
	AANMAH4039	3.135	4.0	14.4	2.8	9.2	2.30	Золотистый
	AANMAH4049	3.135	4.0	15.4	3.8	9.2	2.30	Золотистый
	AANMAH4059	3.135	4.0	16.4	4.8	9.2	2.30	Золотистый
	AANMAH5029	3.135	5.0	13.4	1.8	9.2	2.30	Золотистый
	AANMAH5039	3.135	5.0	14.4	2.8	9.2	2.30	Золотистый
	AANMAH5049	3.135	5.0	15.4	3.8	9.2	2.30	Золотистый
	AANMAH5059	3.135	5.0	16.4	4.8	9.2	2.30	Золотистый
	AANMAH6029	3.135	6.0	13.4	1.8	9.2	2.30	Золотистый
	AANMAH6039	3.135	6.0	14.4	2.8	9.2	2.30	Золотистый
	AANMAH6049	3.135	6.0	15.4	3.8	9.2	2.30	Золотистый
	AANMAH6059	3.135	6.0	16.4	4.8	9.2	2.30	Золотистый
	AANMAH7029	3.135	7.0	13.4	1.8	9.2	2.30	Золотистый
	AANMAH7039	3.135	7.0	14.4	2.8	9.2	2.30	Золотистый
	AANMAH7049	3.135	7.0	15.4	3.8	9.2	2.30	Золотистый

AANMAH7059	3.135	7.0	16.4	4.8	9.2	2.30	Золотистый
ARBOT4019H	3.135	4.0	22.4	0.8	19.0	2.30	Золотистый
ARBOT4019N	3.135	4.0	22.4	0.8	19.0	Н/Д	Золотистый
В состав упаковки входят 2 Винта Multi Post (Multi Post Screw) AANMSF, AANMST							
Масса – не более 0,844 г.							

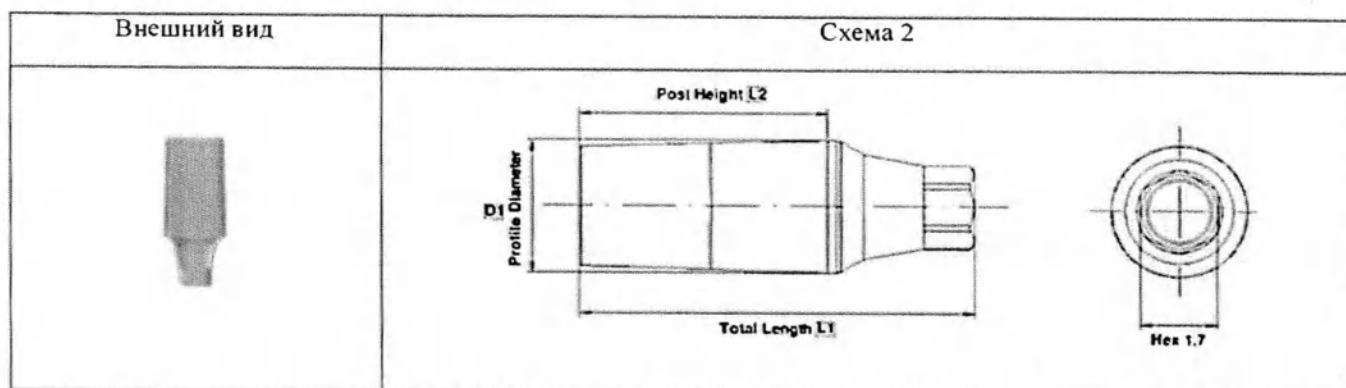- Абатмент обрабатываемый на имплантате MiNi и используется для создания индивидуального уступа по краю десны с помощью ручного фрезерования ответной части абатмента согласно окклюзионной плоскости зубов.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Hex (внешний шестигранный) (±0.05)	Цвет анодизации
		D1 (диаметр профиля) (-0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота ответной части) (-0.02)		
Абатмент обрабатываемый (Milling Abutment)	MIMA3005H	3.00	8.70	5.50	1.70	Золотистый
	MIMA3015H	3.00	9.20	5.50	1.70	Золотистый
	MIMA3025H	3.00	10.20	5.50	1.70	Золотистый
	MIMA3035H	3.00	11.20	5.50	1.70	Золотистый
	MIMA3045H	3.00	12.20	5.50	1.70	Золотистый
	MIMA3007H	3.00	10.20	7.00	1.70	Золотистый
	MIMA3017H	3.00	10.70	7.00	1.70	Золотистый
	MIMA3027H	3.00	11.70	7.00	1.70	Золотистый
	MIMA3037H	3.00	12.70	7.00	1.70	Золотистый
	MIMA3047H	3.00	13.70	7.00	1.70	Золотистый
	MIMA3505H	3.50	8.70	5.50	1.70	Золотистый
	MIMA3515H	3.50	9.20	5.50	1.70	Золотистый
	MIMA3525H	3.50	10.20	5.50	1.70	Золотистый
	MIMA3535H	3.50	11.20	5.50	1.70	Золотистый
	MIMA3545H	3.50	12.20	5.50	1.70	Золотистый
	MIMA3507H	3.50	10.20	7.00	1.70	Золотистый
	MIMA3517H	3.50	10.70	7.00	1.70	Золотистый
	MIMA3527H	3.50	11.70	7.00	1.70	Золотистый
	MIMA3537H	3.50	12.70	7.00	1.70	Золотистый
	MIMA3547H	3.50	13.70	7.00	1.70	Золотистый
Винт абатмента (Abutment Screw) MIA514						
Масса – не более 0.480г.						

7) Абатмент Octa (Octa Abutment)

Является однокомпонентным. В нижней части имеется винт для фиксации в имплантате, в верхней части имеется шахта для винта для фиксации защитного колпачка, слепочного трансфера и различных видов цилиндров (временный цилиндр, цилиндр EZ Post, пластиковый цилиндр, ССМ цилиндр) с помощью винта абатмента.

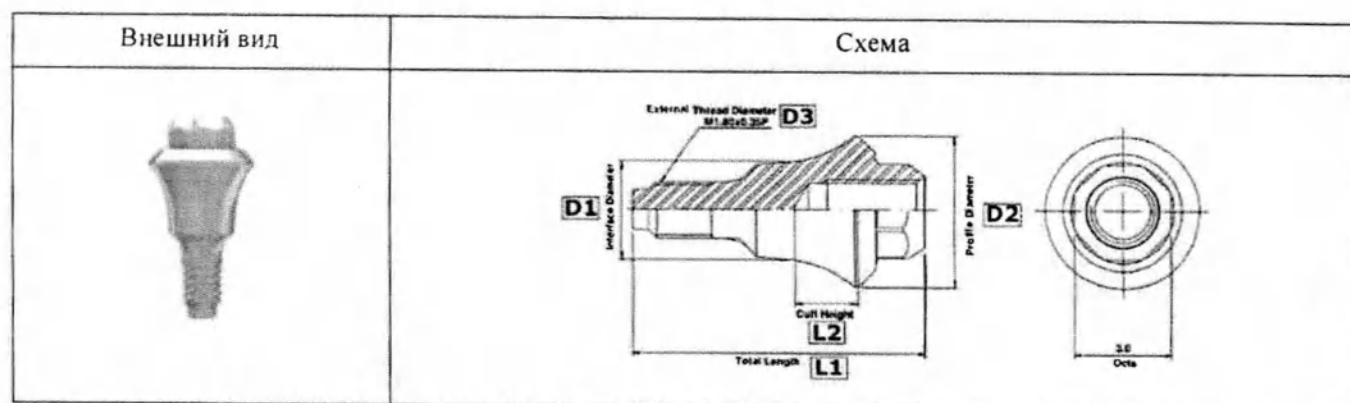Таблица 12.



Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм						Цвет анодизации
		D1 (диаметр интерфейса а (+0.02))	D2 (диаметр профиля) (-0.02)	D3 (диаметр наружной резьбы) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота десны) (±0.05)	Оста (внешний восьмигранник (-0.01))	
Абатмент Оста (Octa Abutment)	AANOAF4010	3.135	3.80	M1.80x0.35P	8.00	1.00	3.00	Золотистый
	AANOAF4020	3.135	3.80	M1.80x0.35P	9.00	2.00	3.00	Золотистый
	AANOAF4030	3.135	3.80	M1.80x0.35P	10.0	3.00	3.00	Золотистый
	AANOAF4040	3.135	3.80	M1.80x0.35P	11.0	4.00	3.00	Золотистый
	AANOAF4050	3.135	3.80	M1.80x0.35P	12.0	5.00	3.00	Золотистый
	AANOAF0010	3.135	4.80	M1.80x0.35P	8.00	1.00	3.00	Золотистый
	AANOAF0020	3.135	4.80	M1.80x0.35P	9.00	2.00	3.00	Золотистый
	AANOAF0030	3.135	4.80	M1.80x0.35P	10.0	3.00	3.00	Золотистый
	AANOAF0040	3.135	4.80	M1.80x0.35P	11.0	4.00	3.00	Золотистый
	AANOAF0050	3.135	4.80	M1.80x0.35P	12.0	5.00	3.00	Золотистый
Масса – не более 0,216 г.								

8) Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)

Используется в соединении с имплантатом для фиксации временных реставраций. При чрезмерной силе нагрузки на временную реставрацию, абатмент должен сломаться для предотвращения смещения или потери стабильности имплантата во время заживления до момента установки постоянного абатмента. Абатмент моделей AFAP5545, AFAA5415, AFAA5425, AANTAH5012 имеет типы: прямой и угловой (с углом 15° и 25°).

Таблица 13.

Внешний вид	Схема 1
 AFAP5545	
 AFAA5415	

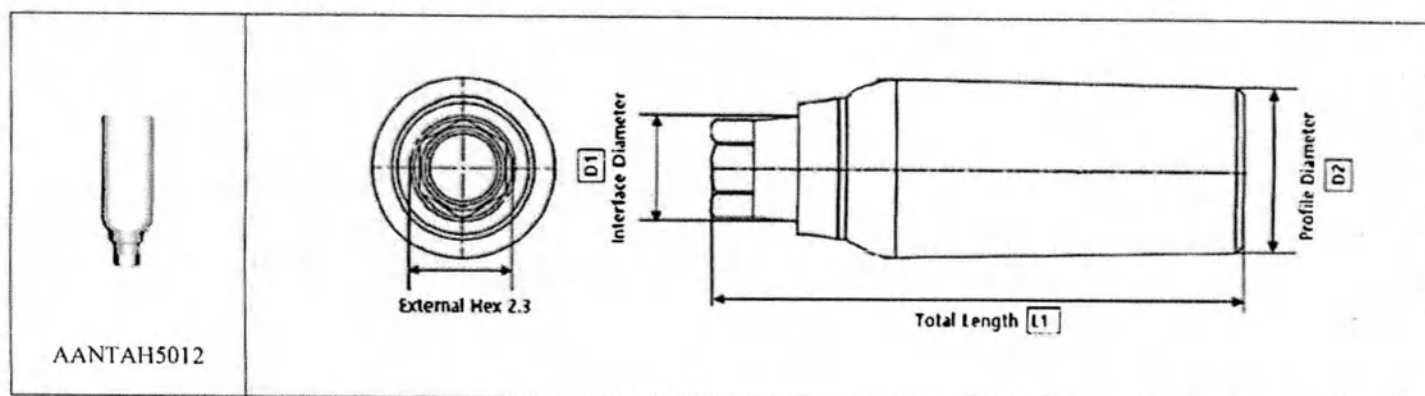


Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм					Цвет маркировки
		D1 (диаметр профиля) (± 0.05)	D2 (диаметр интерфейса) (± 0.03)	L1 (общая длина) (± 0.05)	A1 (угол) (± 0.2)	Hex (внешний шестигранник) (± 0.05)	
Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)	AFAP5545	5.50	3.80	10.70	прямой	2.30	Белый
	AFAA5415	5.50	3.80	12.55	15°	2.30	Белый
	AFAA5425	5.50	3.80	12.55	25°	2.30	Белый
	AANTAH5012	2.80	5.00	14.4	прямой	2.30	Белый
В состав упаковки входит Винт Multi Post (Multi Post Screw) AANMSF и Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap) AFCP, AFCA15, AFCA25							
Масса – не более 0.275 г.							

- Абатмент предохраняющий моделей MFAP3545, MFAA3415 используется в соединении с имплантатом MiNi для фиксации временных реставраций. Так как абатмент устанавливается на имплантат, предустановленный в передний отдел верхней или нижней челюсти, угол наклона абатмента не превышает 15°. При чрезмерной силе нагрузки на временную реставрацию, абатмент должен сломаться для предотвращения смещения или потери стабильности имплантата во время заживления до момента установки постоянного абатмента.

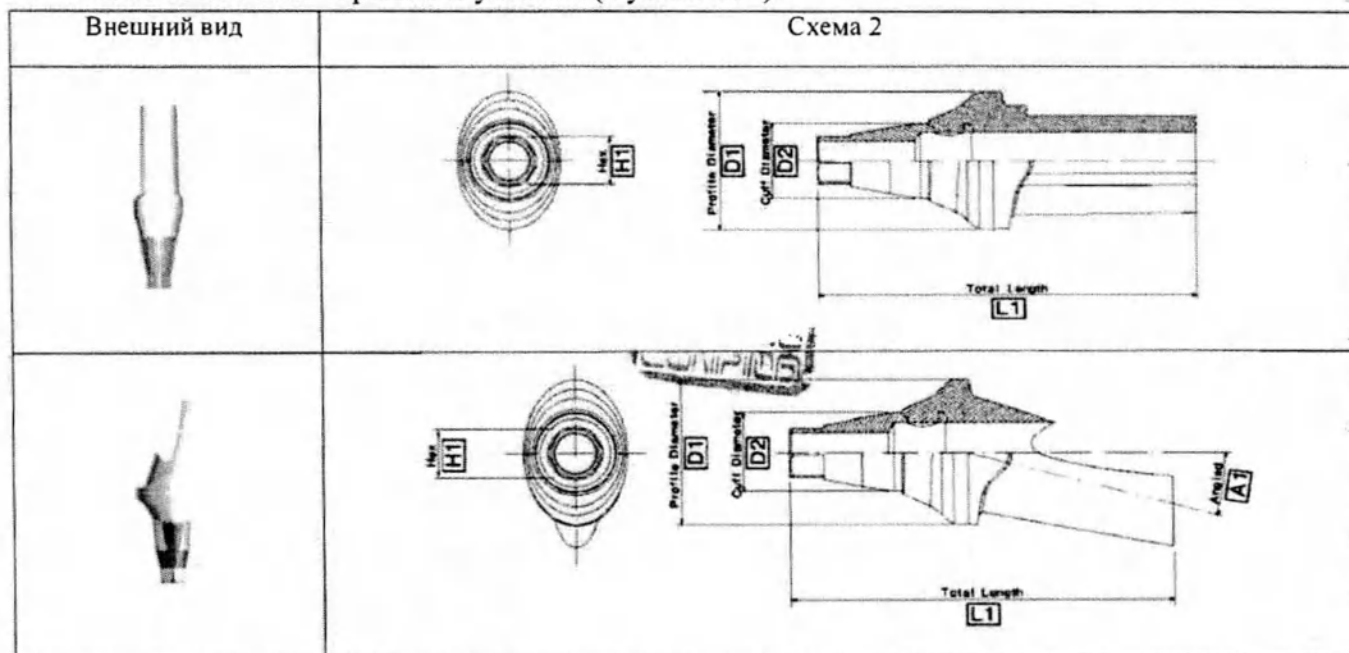Абатмент имеет тип - прямой и угловой (с углом 15°).



Размеры:



Наименование	Модель	Размер, мм				H1 (Hex внешний шестигранник) (± 0.05)	Цвет маркировки
		D1 (диаметр профиля) (± 0.05)	D2 (общая длина) (± 0.05)	L1 (высота верхнего цилиндра) (± 0.02)	A1 (угол) (± 0.2)		

Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)	MFAP3545	5.00	2.70	13.40	-	1.70	Белый
	MFAA3415	5.00	2.70	13.40	15	1.70	Белый
В состав упаковки входит Винт абатмента (Abutment Screw) MIAS14 и Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap) MFCP, MFCA15							
Масса – не более 0.521 г.							

9) Абатмент угловой (Angled Abutment)

Используется для цементной или комбинированной фиксации постоянной или временной реставрации при необходимости коррекции наклона имплантата относительно ортопедической конструкции. Бывают двух типов: с углом 15° и 25°.

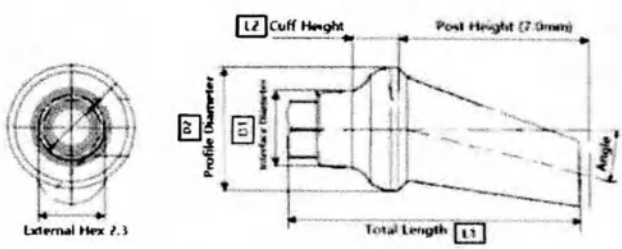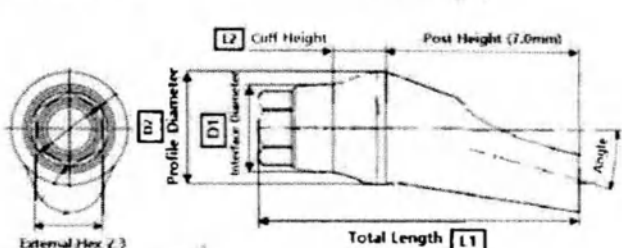Таблица 14.


Внешний вид	Схема 1
 AANA4H4215	
 AANA4E4415	

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм						Цвет анодизации
		D1 (диаметр интерфейса) (+0.02)	D2 (диаметр профиля) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота десны) (±0.05)	A (угол) (±0.2)	Hex (внешний шестигранник) (-0.01)	
Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA4H4215	3.135	4.0	11.4	1.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H4315	3.135	4.0	12.4	2.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H4415	3.135	4.0	13.4	3.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H4515	3.135	4.0	14.4	4.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H5215	3.135	5.0	11.4	1.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H5315	3.135	5.0	12.4	2.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H5415	3.135	5.0	13.4	3.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H5515	3.135	5.0	14.4	4.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H6215	3.135	6.0	11.4	1.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H6315	3.135	6.0	12.4	2.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H6415	3.135	6.0	13.4	3.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H6515	3.135	6.0	14.4	4.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H7215	3.135	7.0	11.4	1.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H7315	3.135	7.0	12.4	2.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H7415	3.135	7.0	13.4	3.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H7515	3.135	7.0	14.4	4.8	15°	2.3	Золотистый
	AANA4H4225	3.135	4.0	11.4	1.8	25°	2.3	Золотистый
	AANA4H4325	3.135	4.0	12.4	2.8	25°	2.3	Золотистый
	AANA4H4425	3.135	4.0	13.4	3.8	25°	2.3	Золотистый
	AANA4H4525	3.135	4.0	14.4	4.8	25°	2.3	Золотистый
	AANA4H5225	3.135	5.0	11.4	1.8	25°	2.3	Золотистый
	AANA4H5325	3.135	5.0	12.4	2.8	25°	2.3	Золотистый
	AANA4H5425	3.135	5.0	13.4	3.8	25°	2.3	Золотистый
	AANA4H5525	3.135	5.0	14.4	4.8	25°	2.3	Золотистый

AANAAH6225	3.135	6.0	11.4	1.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAH6325	3.135	6.0	12.4	2.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAH6425	3.135	6.0	13.4	3.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAH6525	3.135	6.0	14.4	4.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAH7225	3.135	7.0	11.4	1.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAH7325	3.135	7.0	12.4	2.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAH7425	3.135	7.0	13.4	3.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAH7525	3.135	7.0	14.4	4.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE4215	3.135	4.0	11.4	1.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE4315	3.135	4.0	12.4	2.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE4415	3.135	4.0	13.4	3.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE4515	3.135	4.0	14.4	4.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE5215	3.135	5.0	11.4	1.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE5315	3.135	5.0	12.4	2.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE5415	3.135	5.0	13.4	3.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE5515	3.135	5.0	14.4	4.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE6215	3.135	6.0	11.4	1.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE6315	3.135	6.0	12.4	2.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE6415	3.135	6.0	13.4	3.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE6515	3.135	6.0	14.4	4.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE7215	3.135	7.0	11.4	1.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE7315	3.135	7.0	12.4	2.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE7415	3.135	7.0	13.4	3.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE7515	3.135	7.0	14.4	4.8	15°	2.3	Золотистый
AANAAE4225	3.135	4.0	11.4	1.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE4325	3.135	4.0	12.4	2.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE4425	3.135	4.0	13.4	3.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE4525	3.135	4.0	14.4	4.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE5225	3.135	5.0	11.4	1.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE5325	3.135	5.0	12.4	2.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE5425	3.135	5.0	13.4	3.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE5525	3.135	5.0	14.4	4.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE6225	3.135	6.0	11.4	1.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE6325	3.135	6.0	12.4	2.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE6425	3.135	6.0	13.4	3.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE6525	3.135	6.0	14.4	4.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE7225	3.135	7.0	11.4	1.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE7325	3.135	7.0	12.4	2.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE7425	3.135	7.0	13.4	3.8	25°	2.3	Золотистый
AANAAE7525	3.135	7.0	14.4	4.8	25°	2.3	Золотистый
В состав упаковки входят 2 Винта Multi Post (Multi Post Screw) AANMSF, AANMST							
Масса – не более 1.036 г.							

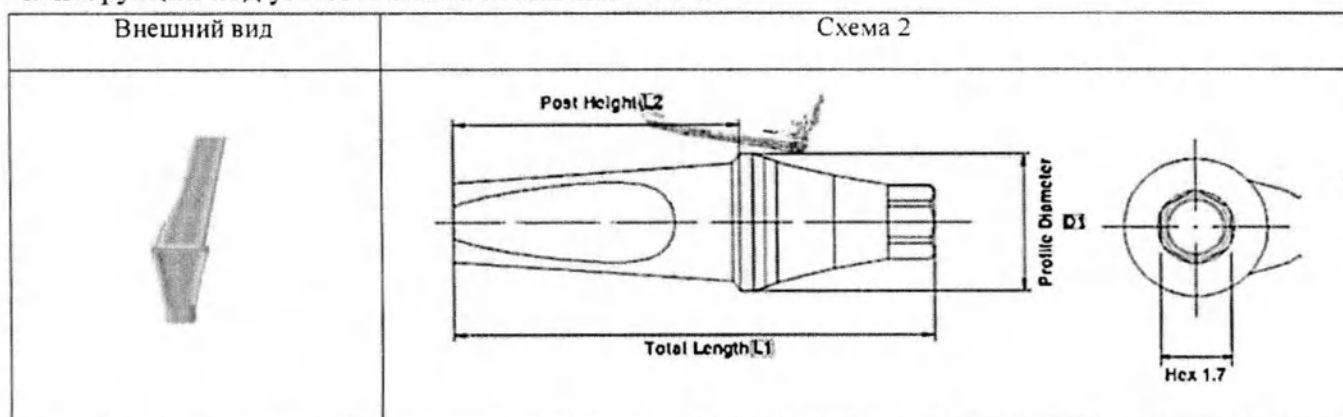- Абатмент угловой моделей MIAA3215H, MIAA3315H, MIAA3415H, MIAA3215E, MIAA3315E, MIAA3415E используется для коррекции наклона имплантата относительно ортопедической конструкции под углом наклона абатмента - 15°.



Размеры:



Наименование	Модель	Размер, мм				Hex (внешний шестигранн	Цвет анодизации
		D1 (диаметр)	L1 (общая)	L2 (высота)	Угол		

		профиля) (± 0.05)	длины) (± 0.05)	ответной части) (± 0.02)	(± 0.2)	ик) (-0.01)	
Абатмент угловой (Angled Abutment)	MIAA3215H	3.50	11.70	7.00	15	1.70	Золотистый
	MIAA3315H	3.50	12.70	7.00	15	1.70	Золотистый
	MIAA3415H	3.50	13.70	7.00	15	1.70	Золотистый
	MIAA3215E	3.50	11.70	7.00	15	1.70	Золотистый
	MIAA3315E	3.50	12.70	7.00	15	1.70	Золотистый
	MIAA3415E	3.50	13.70	7.00	15	1.70	Золотистый
Винт абатмента (Abutment Screw) MIA514							
Масса – не более 0,169г.							

10) Абатмент примерочный (Try-in Abutment)

Абатмент примерочный используется для измерения толщины десны и проверки правильной посадки протеза перед окончательной установкой ортопедической конструкции на мульти-юнит абатментах. Абатмент примерочный переносится на имплантат с помощью Инструмента для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier) MUAAC.

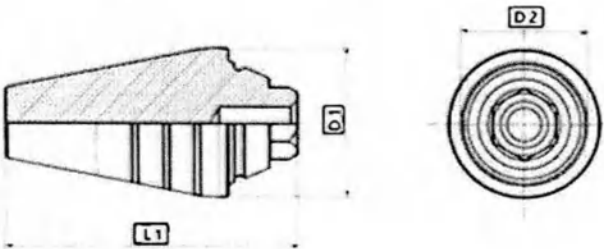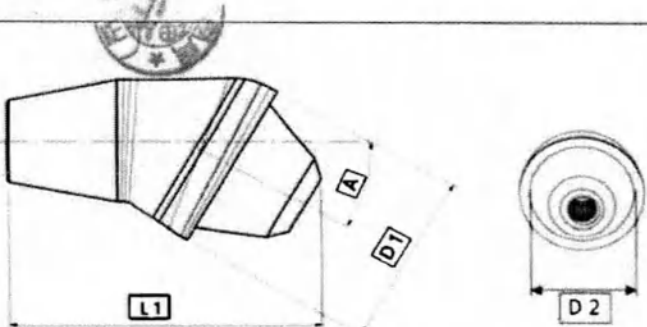Таблица 15.

Внешний вид	Схема
 прямой с шестигранником	
 угловой без шестигранника	

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм				А (угол) (±0.2)	Цвет анодизации
		D1 (диаметр профиля) (-0.05)	D2 (диаметр соединения с имплантатом) (- 0.02)	L1 (общая длина) (±0.05)	Hex (внешний шестигранник) (-0.01)		
Абатмент примерочный (Try-in Abutment)	MUTIAAR00	4.8	4.0	9.10	2.00	Н/Д	Светло- желтый
	MUTIAAR17	4.8	4.0	8.55	Н/Д	17°	Светло- желтый
	MUTIAAR30	4.8	4.0	8.03	Н/Д	30°	Светло- желтый
	В состав упаковки входит Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier) MUAAC						
Масса – не более 0,635 г.							

11) Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)

Используется для фиксации полных съемных конструкций на имплантатах при полной адентии, в случае серьезной резорбции кости верхней или нижней челюсти или, когда протезы на винтовой

или цементной фиксации невозможно установить. На абатмент устанавливается ретенционный колпачок, на который затем размещается матрица, предустановленная в съемный протез.

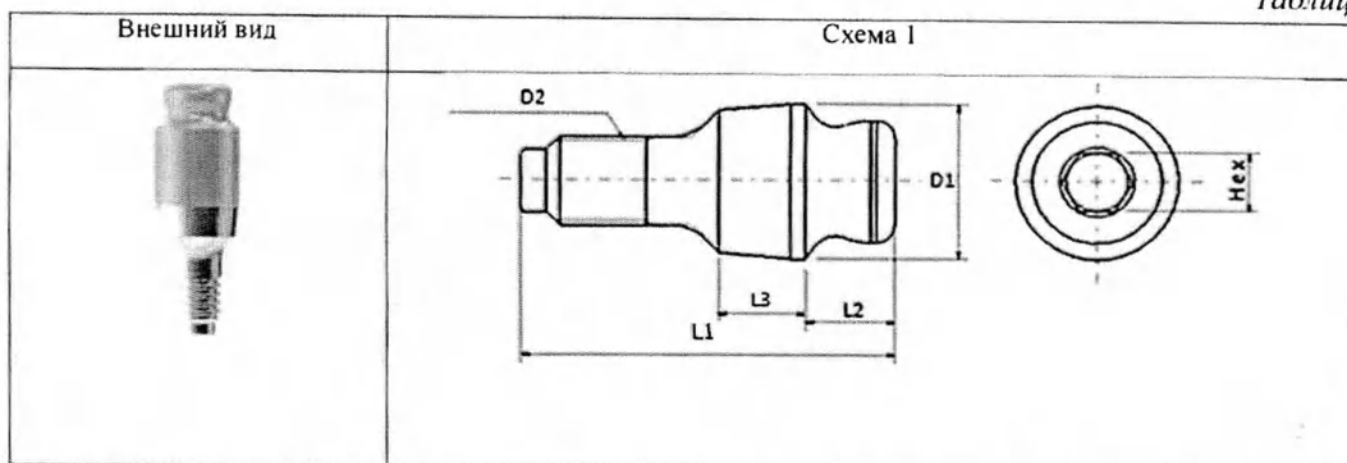
Таблица 16.



Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм					Hex (внутренний шестигранник) (±0.05)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр профиля) (±0.05)	D2 (диаметр наружной резьбы) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота головки) (±0.05)	L3 (высота десны) (±0.05)		
Абатмент Meg- Rhein (Meg- Rhein Abutment)	ADR00	3.135	M1.8 x 0.35P	7.25	1.70	1.70	1.20	TiN
	ADR01	3.135	M1.8 x 0.35P	7.75	1.70	2.20	1.20	TiN
	ADR02	3.135	M1.8 x 0.35P	8.75	1.70	3.20	1.20	TiN
	ADR03	3.135	M1.8 x 0.35P	9.75	1.70	4.20	1.20	TiN
	ADR04	3.135	M1.8 x 0.35P	10.75	1.70	5.20	1.20	TiN
	ADR05	3.135	M1.8 x 0.35P	11.75	1.70	6.20	1.20	TiN
	ADR06	3.135	M1.8 x 0.35P	12.75	1.70	7.20	1.20	TiN
Масса – не более 0,323 г.								

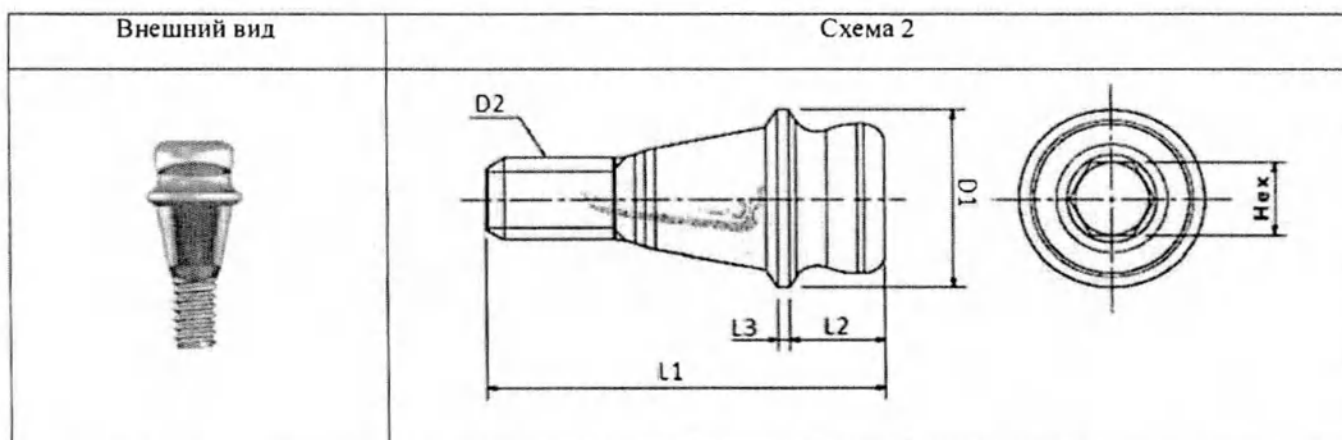- Абатмент Meg-Rhein моделей MDR00, MDR01, MDR02, MDR03, MDR04, MDR0, MDR06 используется для фиксации полных съемных конструкций на имплантатах MiNi при полной адентии, в случае серьезной резорбции кости верхней или нижней челюсти или, когда протезы на винтовой или цементной фиксации невозможно установить. На абатмент устанавливается ретенционный колпачок, на который затем размещается матрица, предустановленная в съемный протез.



Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм					Hex (внутренний шестигранник) (±0.01/-0.02)	Поверхность
		D1 (диаметр профиля) (±0.05)	D2 (диаметр внешней резьбы) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота головки) (±0.05)	L3 (высота десны) (±0.05)		

Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	MDR00	3.00	M1.4 x 0.3P	6.55	1.55	2.7	1.20	TiN
	MDR01	3.00	M1.4 x 0.3P	6.95	1.55	3.1	1.20	TiN
	MDR02	3.00	M1.4 x 0.3P	7.95	1.55	4.1	1.20	TiN
	MDR03	3.00	M1.4 x 0.3P	8.95	1.55	5.1	1.20	TiN
	MDR04	3.00	M1.4 x 0.3P	9.95	1.55	6.1	1.20	TiN
	MDR05	3.00	M1.4 x 0.3P	10.95	1.55	7.1	1.20	TiN
	MDR06	3.00	M1.4 x 0.3P	11.95	1.55	8.1	1.20	TiN
Масса – не более 0.224 г.								

12) Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)

Используется для фиксации съемных протезов на имплантатах при полной адентии, в случае серьезной резорбции кости верхней или нижней челюсти или, когда протезы на винтовой или цементной фиксации невозможно установить. На абатменте размещается ретенционное кольцо, на него металлическая матрица, предустановленная в съемный протез. Абатмент Meg-Ball позволяет скомпенсировать угол наклона имплантата относительно съемного протеза.

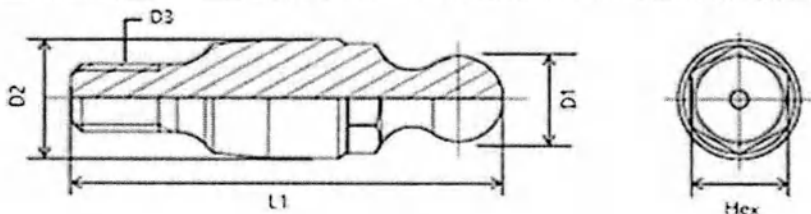Таблица 17.

Внешний вид	Схема
	


Размеры:



Наименование	Модель	Размер, мм				Hex (внешний шестигранник) (-0.02)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр головки) (-0.02)	D2 (диаметр профиля) (+0.02)	D3 (диаметр наружной резьбы) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)		
Абатмент Meg- Ball (Meg-Ball Abutment)	MBAR00	2.25	3.135	M1.8 x 0.35P	9.50	2.50	Машинная
	MBAR10	2.25	3.135	M1.8 x 0.35P	10.00	2.50	Машинная
	MBAR20	2.25	3.135	M1.8 x 0.35P	11.00	2.50	Машинная
	MBAR30	2.25	3.135	M1.8 x 0.35P	12.00	2.50	Машинная
	MBAR40	2.25	3.135	M1.8 x 0.35P	13.00	2.50	Машинная
	MBAR50	2.25	3.135	M1.8 x 0.35P	14.00	2.50	Машинная
	MBAR60	2.25	3.135	M1.8 x 0.35P	15.00	2.50	Машинная
Масса – не более 0.397г.							

13) Абатмент сканируемый (Scan Abutment)

Абатмент сканируемый используется для переноса местоположения и ориентации имплантата или абатмента в цифровую среду с помощью интраорального или лабораторного сканера.

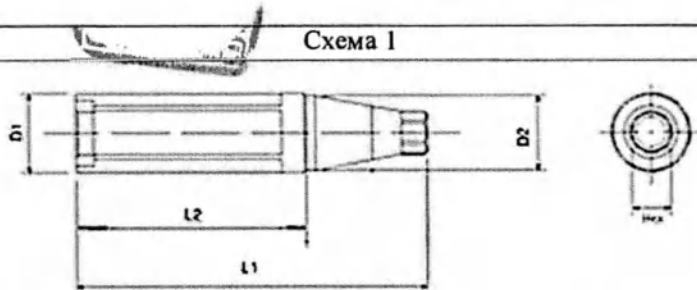Таблица 18.


Внешний вид	Схема 1
 AANISR4009	

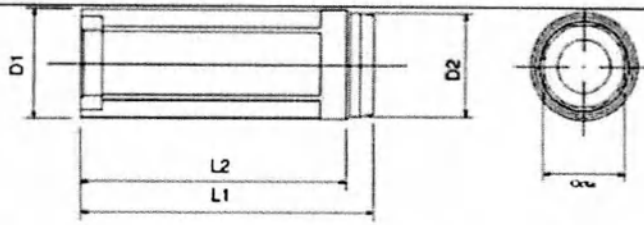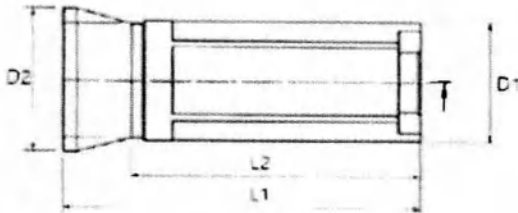 AOCEC4011	
 AMUASR4013	

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Hex (внешний шестигранник) (-0.01)	Оста (внутренний восьмигранник) (-0.01)	Обработка поверхности	Винт
		D1 (диаметр профиля) (±0.05)	D2 (диаметр интерфейса) (-0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота ответной части) (±0.05)				
Абатмент сканируемый (Scan Abutment)	AANISR4009	4.00	3.14	11.40	6.00	2.30	Н/Д	Машинная	SAAANMSF
	AANISR4013	4.00	3.14	15.40	10.00	2.30	Н/Д	Машинная	
	AOCEC4011	4.00	3.60	Н/Д	11.00	Н/Д	3.01	Машинная	SAIRCS200
	AMUASR4013	4.00	4.80	Н/Д	13.00	Н/Д	Н/Д	Машинная	SAMUAS
Масса – не более 0,775 г.									

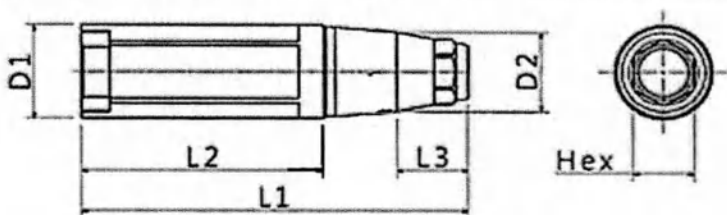- Абатмент сканируемый моделей MISS3509, MISS3513, используется для переноса местоположения и ориентации имплантата MiNi в цифровую среду с помощью интраорального или лабораторного сканера.

Внешний вид	Схема 2
	

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм					Hex (внешний шестигранник) (±0.05)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр профиля) (±0.05)	D2 (диаметр интерфейса) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота ответной части) (±0.05)	L3 (высота плоскости) (±0.05)		
Абатмент сканируемый (Scan Abutment)	MISS3509	3.50	2.38	11.40	6.00	2.40	1.70	Машинная
	MISS3513	3.50	2.38	15.40	10.00	2.40	1.70	Машинная
	В состав упаковки входит Винт абатмента (Abutment Screw) SAMIAS14							
	Масса – не более 0,309 г.							

14) Абатмент сканируемый Тип C (Scan Abutment C-type)

Используется для переноса местоположения и ориентации имплантата в цифровую среду с помощью интраорального или лабораторного сканера по технологии CEREC.

Таблица 19.

Внешний вид	Схема
-------------	-------

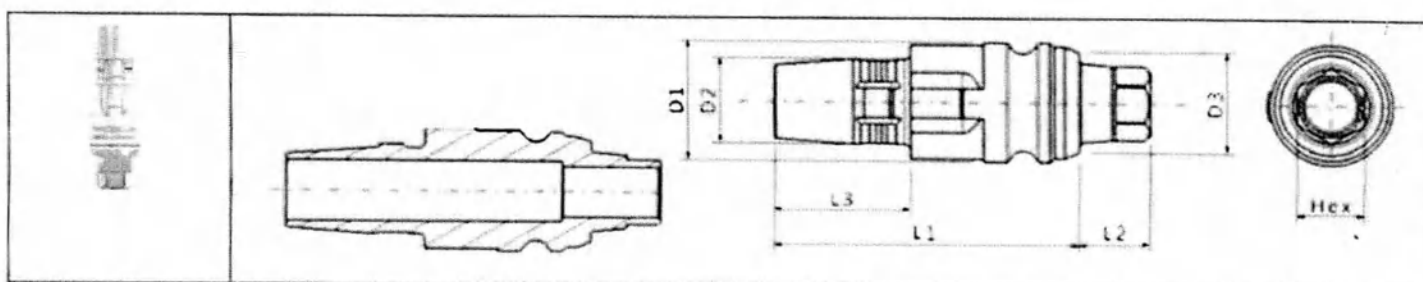

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм						Hex (внешний шестигранник) (-0.01)	Обработка поверхности
		D1 (общий диаметр) (-0.05)	D2 (диаметр ответной части) (-0.02)	D3 (диаметр интерфейса) (-0.02)	L1 (общая длина) (-0.02)	L2 (высота ответной части) (-0.05)	L3 (высота сканируемой части) (-0.02)		
Абатмент сканируемый Тип С (Scan Abutment C-type)	ARICSS3405	4.20	3.00	3.50	10.40	2.40	4.70	2.30	Машинная
	ARICSS3410	4.20	3.00	3.50	10.90	2.40	4.70	2.30	Машинная
	ARICSS3420	4.20	3.00	3.50	11.90	2.40	4.70	2.30	Машинная
	ARICSS3805	4.20	3.00	3.50	10.40	2.40	4.70	2.30	Машинная
	ARICSS3810	4.20	3.00	3.50	10.90	2.40	4.70	2.30	Машинная
	ARICSS3820	4.20	3.00	3.50	11.90	2.40	4.70	2.30	Машинная
	ARICSL4505	4.60	3.40	3.50	10.40	2.40	4.70	2.30	Машинная
	ARICSL4510	4.60	3.40	3.50	10.90	2.40	4.70	2.30	Машинная
	ARICSL4520	4.60	3.40	3.50	11.90	2.40	4.70	2.30	Машинная
В состав упаковки входит Винт Multi Post (Multi Post Screw) SAAANMSF									
Масса – не более 0,515 г.									

15) Абатмент премил (TiGen Abutment)

Абатмент премил используется для изготовления индивидуального абатмента с уровня имплантата с использованием цифрового протокола. Фиксируется на имплантате с помощью внешнего винта в нижней части абатмента. Обрабатывается с использованием стоматологической технологии CAD/CAM в соответствии с индивидуальными сведениями о пациенте. Заготовка имеет крепление по технологии ARUM.

Таблица 20.


Внешний вид	Схема 1
 ARTR1020	
 OCTS1020	

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм					Hex (внешний шестигранник)	Окта (внутренний восьмигранник)	Цвет анодизации/ Обработка
		D1 (диаметр профиля)	D2 (диаметр интерфейса)	L1 (общая длина)	L2 (длина соединения)	L3 (длина шахты винта)			

		(-0.05)	(+0.02)	(±0.05)	(±0.05)	(±0.05)	ик) (+0.02)	к) (+0.02)	поверхности
Абатмент премил (TiGen Abutment)	ARTR1020	10.00	3.135	28.60	2.60	3.80	2.30	Н/Д	Золотистый
	ARTR1020N	10.00	3.135	28.60	2.60	3.80	Н/Д	Н/Д	Золотистый
	ARTR1220	12.00	3.135	28.60	2.60	3.80	2.30	Н/Д	Золотистый
	ARTR1220N	12.00	3.135	28.60	2.60	3.80	Н/Д	Н/Д	Золотистый
	OCTS1020	10.00	3.87	26.00	2.00	3.00	Н/Д	3.01	Машинная
	NOTS1020	10.00	3.87	26.00	2.00	3.00	Н/Д	Н/Д	Машинная
	OCTS1220	10.00	3.87	26.00	2.00	3.00	Н/Д	3.01	Машинная
	NOTS1220	10.00	3.87	26.00	2.00	3.00	Н/Д	Н/Д	Машинная
	OCTR1020	10.00	4.80	26.00	2.00	3.00	Н/Д	3.01	Машинная
	NOTR1020	10.00	4.80	26.00	2.00	3.00	Н/Д	Н/Д	Машинная
	OCTR1220	12.00	4.80	26.00	2.00	3.00	Н/Д	3.01	Машинная
	NOTR1220	12.00	4.80	26.00	2.00	3.00	Н/Д	Н/Д	Машинная
В состав упаковки входит Винт Multi Post (Multi Post Screw) AANMSF, AANMST - 13 шт или Винт абатмента (Abutment Screw) IRCS200 – 13 шт.									
Масса – не более 18,505 г.									

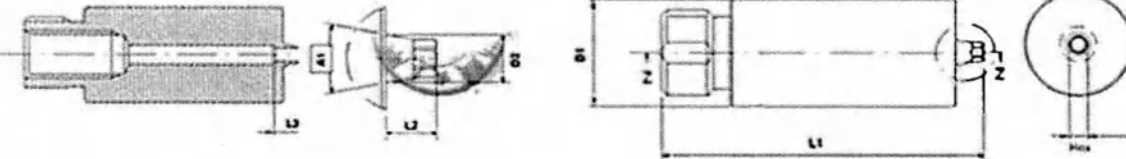Абатмент премил моделей MITN1020, MITN1020N используется для изготовления индивидуального абатмента с уровня имплантата с использованием цифрового протокола. Фиксируется на имплантате MiNi с помощью внешнего винта в нижней части абатмента. Обрабатывается с использованием стоматологической технологии CAD/CAM в соответствии с индивидуальными сведениями о пациенте. Заготовка имеет крепление по технологии ARUM.

Внешний вид	Схема 2
	

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм					Hex (Внешний шестигранник) (±0.01/-0.02)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр профиля) (-0.05)	D2 (диаметр интерфейса) (+0.02)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота ответной части) (±0.05)	L3 (высота десны) (±0.05)		
Абатмент премил (TiGen Abutment)	MITN1020	10.00	2.38	28.40	2.40	3.45	1.70	Машинная
	MITN1020N	10.00	2.38	28.00	2.00	3.05	Н/Д	Машинная
В состав упаковки входит Винт абатмента (Abutment Screw) MIAS14 – 13 шт								
Масса – не более 13,075 г.								

16) Винт-заглушка (Cover screw)

Винт-заглушка служит для защиты внутренней поверхности имплантата и позволяет закрыть платформу имплантата после его установки. Защищает имплантат от прорастания кости до момента установки абатмента.

Таблица 21.


Внешний вид	Схема 1
-------------	---------

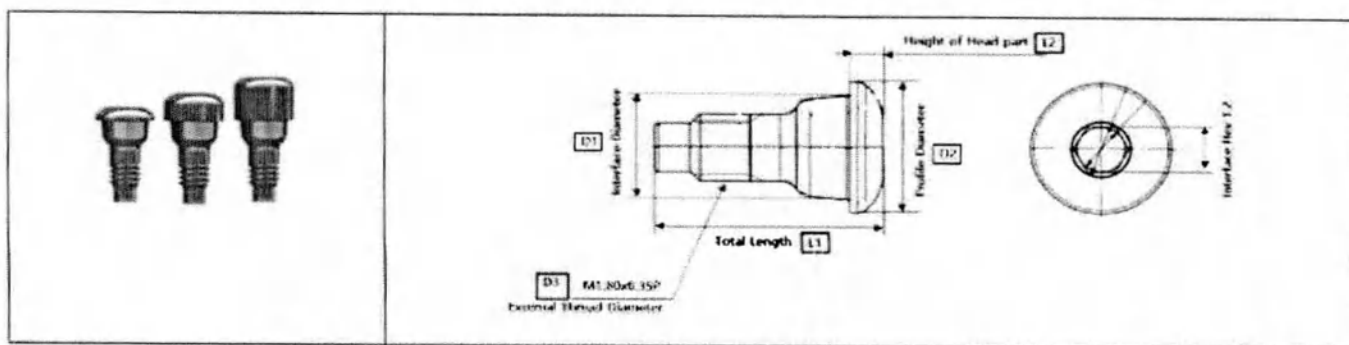

Размеры:

Наименование	Артикул	Размер, мм						Цвет анодизации
		D1 (диаметр интерфейса (-0.02))	D2 (диаметр платформы (-0.02))	D3 (диаметр внешней резьбы) (± 0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (высота головки) (± 0.05)	Hex (внутренний шестиграннык) (+0.02)	
Винт-заглушка (CoverScrew)	AANCSF3508	2.8	3.5	M1.80x0.35P	5.7	0.8	1.2	Синий
	AANCSF3516	2.8	3.5	M1.80x0.35P	6.5	1.5	1.2	Синий
	AANCSF3526	2.8	3.5	M1.80x0.35P	7.5	2.5	1.2	Синий
Масса – не более 0,173 г.								

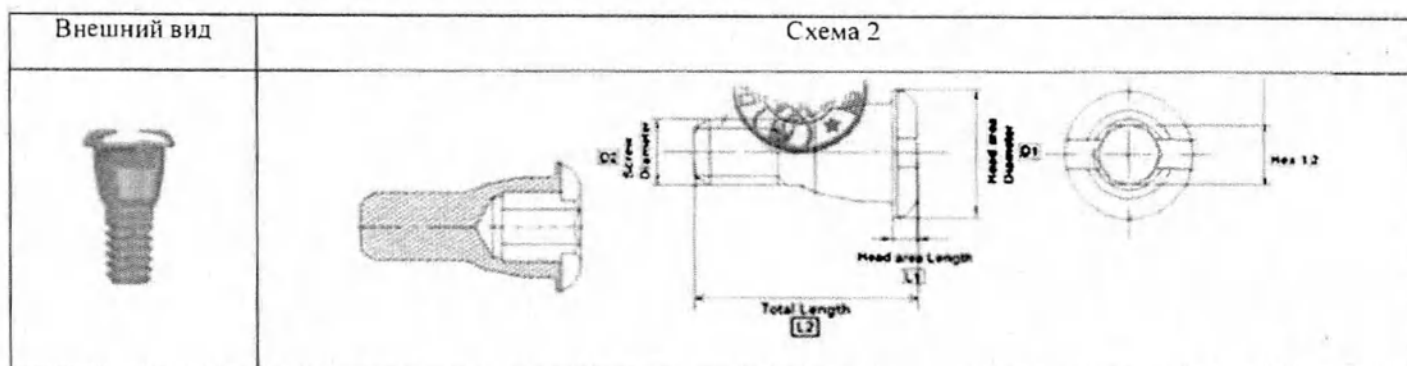Винт-заглушка модели MICS2505 служит для защиты внутренней поверхности имплантата MiNi и позволяет закрыть платформу имплантата после его установки. Защищает имплантат от прорастания кости до момента установки абатмента.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Hex (внутренний шестиграннык) ($\pm 0.01/-0.02$)	Цвет анодизации
		D1 (диаметр головки) (-0.02)	D2 (диаметр внешней резьбы) (± 0.01)	L1 (высота головки) (± 0.05)	L2 (общая длина) (± 0.05)		
Винт-заглушка (Cover Screw)	MICS2505	2.60	1.35	0.50	4.50	1.20	Зеленый
Масса – не более 0,041 г.							

17) Винт-заглушка i-Gen (i-Gen Cover Screw)

Винт-заглушка i-Gen используется для фиксации мембраны i-Gen на винте i-Gen.

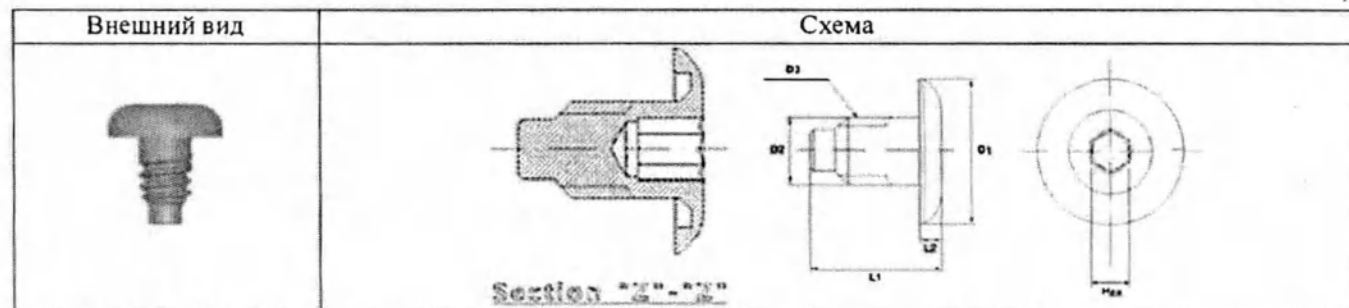Таблица 22.



Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм	Hex	Цвет
--------------	--------	------------	-----	------



		D1 (общий диаметр) (-0.02)	D2 (диаметр интерфейса) (±0.05)	D3 (диаметр внешнего винта) (±0.05)	L1 (Общая длина) (±0.03)	L2 (высота десны) (±0.05)	(внутренний шестигранник) (+0.02)	анодизации
Винт-заглушка i-Gen (i-Gen Cover Screw)	ICS3510	3.50	1.56	M1.6x0.35P	3.60	1.00	1.20	Зеленый

Масса – не более 0,088 г.

18) Винт i-Gen (i-Gen Screw)

Винт i-Gen (i-Gen Screw) используется для фиксации мембраны при необходимости направленной регенерации кости вокруг имплантата при его установке. После установки винта в имплантате, на нем фиксируется мембрана, которая защищает костный материал вокруг имплантата.

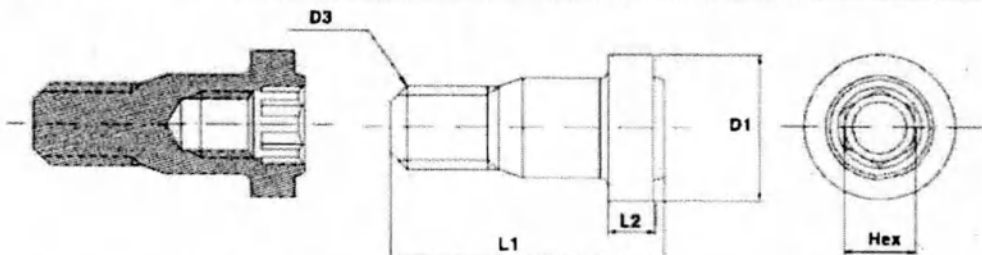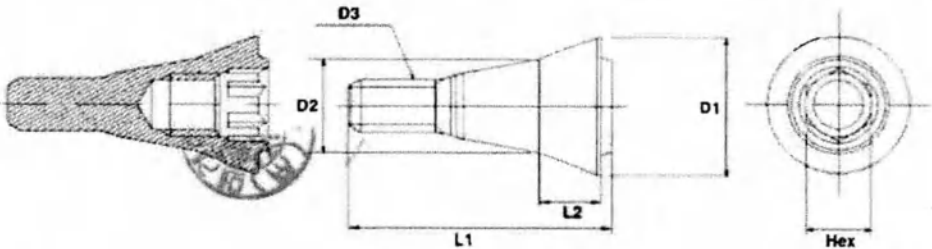Таблица 23.

Внешний вид	Схема
 IA1820	
 IA1415	

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм					Hex (внутренний шестигранник) (+0.02)
		D1 (общий диаметр) (- 0.02)	D2 (диаметр интерфейса) (-0.02)	D3 (диаметр внешнего винта) (-0.02)	L1 (Общая длина) (- 0.02)	L2 (высота десны) (-0.02)	
Винт i-Gen (i-Gen Screw)	IA1810	3.50	2.30	M1.8x0.35P	6.15	1.00	1.60
	IA1820	3.50	2.30	M1.8x0.35P	7.15	2.00	1.60
	IA1830	3.50	2.30	M1.8x0.35P	8.15	3.00	1.60
	IA1840	3.50	2.30	M1.8x0.35P	9.15	4.00	1.60
	IA1850	3.50	2.30	M1.8x0.35P	10.15	5.00	1.60
	IA1415	3.50	2.38	M1.4x0.3P	6.35	1.50	1.60
	IA1420	3.50	2.38	M1.4x0.3P	6.85	2.00	1.60
	IA1430	3.50	2.38	M1.4x0.3P	7.85	3.00	1.60
	IA1440	3.50	2.38	M1.4x0.3P	8.85	4.00	1.60
	IA1450	3.50	2.38	M1.4x0.3P	9.85	5.00	1.60
Обработка поверхности - машинная							
Масса – не более 0,266 г.							

19) Винт Multi Post (Multi Post Screw)

Служит для фиксации абатмента на имплантате. Закручивается в шахту абатмента. Входит в комплект поставки с абатментом EZ Post, обтачиваемым абатментом, угловым абатментом и сканируемым абатментом. SAAANMSF - в комплекте поставки со сканируемым абатментом.

Таблица 24.

Внешний вид	Схема
-------------	-------

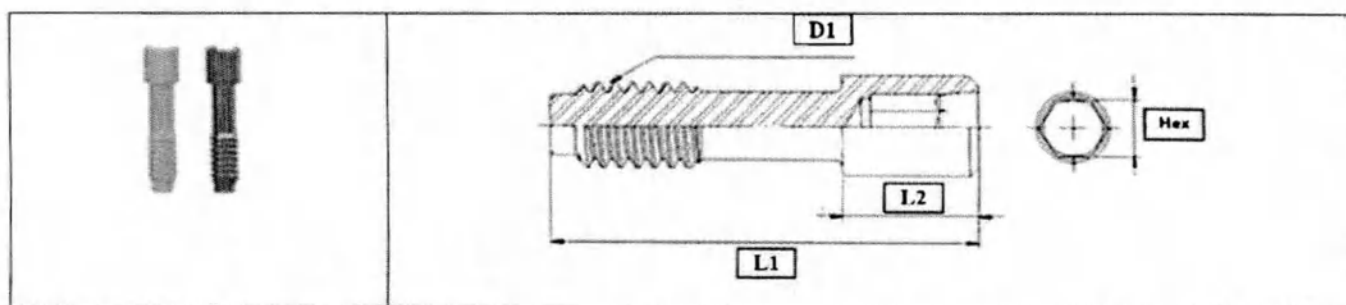


Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Н (внутренний шестигранник) (±0.05)	Цвет анодизации
		D1 (диаметр наружной резьбы) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота головки) (±0.05)		
Винт Multi Post (Multi Post Screw)	AANMSF	M1.80x0.35P	8.0	2.0	1.2	Золотистый
	AANMST	M1.80x0.35P	8.0	2.0	1.2	Синий
	SAAANMSF	M1.80x0.35P	8.0	2.0	1.2	Золотистый
Масса – не более 0,067 г.						

20) Винт абатмента (Abutment Screw)

Служит для фиксации Колпачка защитного, Цилиндра временного, Цилиндра EZ Post, Цилиндра CCM, Цилиндра пластикового на абатменте Оста.

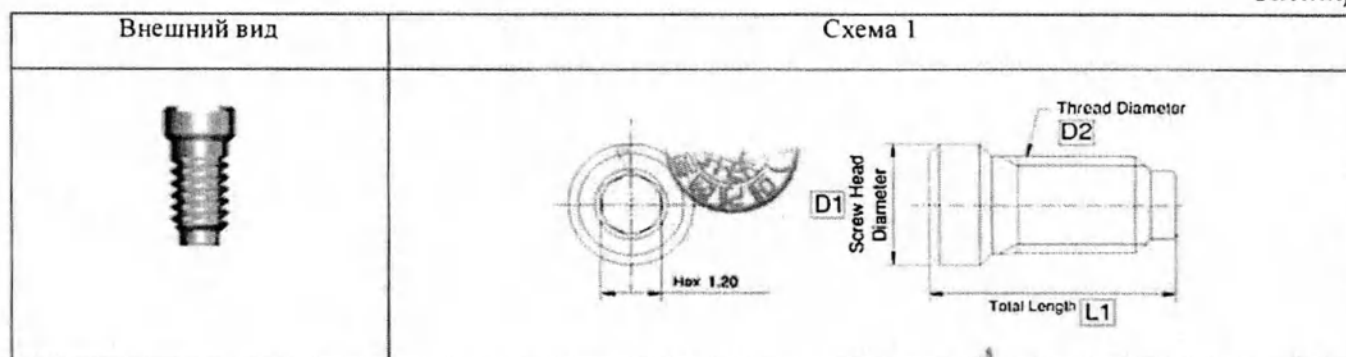
Таблица 25.





Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Н (внутренний шестигранник) (±0.05)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр головки) (±0.05)	D2 (диаметр резьбы) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)		
Винт абатмента (Abutment Screw)	IRCS200	2.50	M2.0x0.4P	4.85	1.2	Машинная
	SAIRCS200	2.50	M2.0x0.4P	4.85	1.2	Машинная
Масса – не более 0,068 г.						

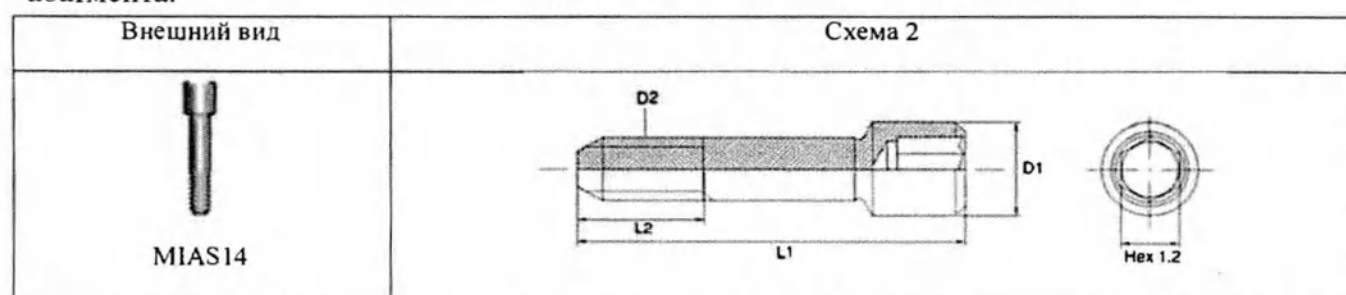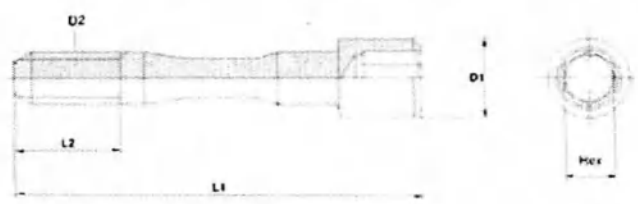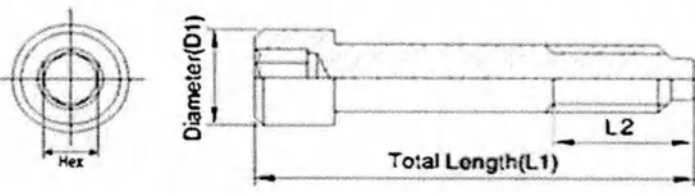- Винт абатмента MIAS14, MIAZ1410, SAMIAS14 служит для фиксации различных видов абатментов на имплантате. MIAS – для постоянных и временных абатментов, например, абатмент EZ Post, абатмент обтачиваемый, SAMIAS - для сканируемого абатмента. MIAZ - для ZrGen абатмента.



 MIAZ1410	
 SAMIAS14	



Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Hex (внутренний шестигранник) ($\pm 0.01/-0.02$)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр головки) (-0.05)	D2 (диаметр внешней резьбы) (± 0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (длина внешней резьбы) ($+0.01$)		
Винт абатмента (Abutment Screw)	MIAS14	2.00	M1.4x0.3P	8.00	2.60	1.20	Машинная
	MIAZ1410	2.00	M1.4x0.3P	10.00	2.60	1.20	Машинная
	SAMIAS14	2.00	M1.4x0.3P	8.00	2.60	1.20	Машинная
Масса – не более 0,061 г.							

21) Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Screw)

Служит для фиксации абатмента Multi-unit углового на имплантате. Закручивается в шахту абатмента.

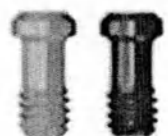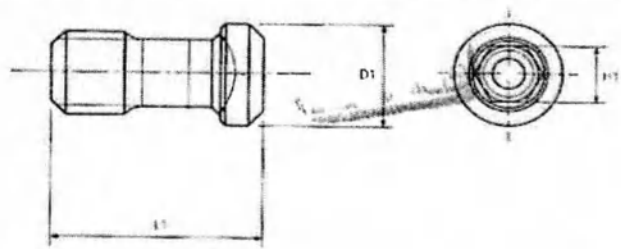Таблица 26.

Внешний вид	Схема
	


Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм		Hex (внутренний шестигранник) (± 0.05)	Цвет анодизации
		D1 (диаметр головки) (± 0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)		
Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Screw)	MUAARSF	2.20	4.40	1.20	Золотистый
	MUAARST	2.20	4.40	1.20	Синий
Масса – не более 0,048 г.					

22) Винт цилиндра (Cylinder Screw)

Служит для фиксации цилиндра и колпачка предохраняющего на абатменте Multi-unit. Закручивается в шахту абатмента. Входит в комплект поставки Цилиндра временного, Цилиндра ССМ, Колпачка предохраняющего, Титанового основания (AMUAPR5515N, AMUAPR5516N, AMUAPR5518N).

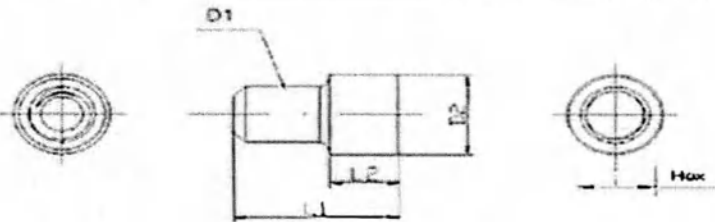Таблица 27.

Внешний вид	Схема
	


Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Н (внутренний шестигранник) (±0.05)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр резьбы) (±0.05)	D2 (диаметр головки) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота головки) (±0.05)		
Винт цилиндра (Cylinder Screw)	MUAS	M1.4 x0.3P	2.0	3.4	1.4	1.2	Машинная
	SAMUAS	M1.4 x0.3P	2.0	3.4	1.4	1.2	Машинная
Масса – не более 0.023 г.							

23) Винт S.H.A (S.H.A Screw)

Служит для фиксации сканируемого формирователя десны к имплантату.

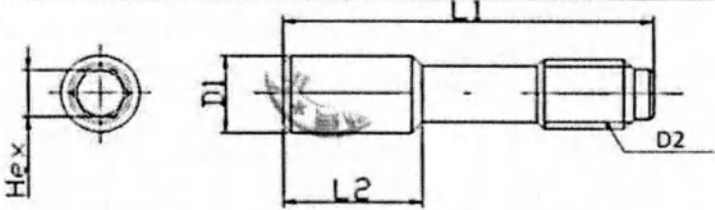Таблица 28.

Внешний вид	Схема
	


Размеры:





Наименование	Модель	Размер, мм				Н (внутренний шестигранник) (±0.05)	Обработка поверхности/ Цвет анодизации
		D1 (диаметр головки) (±0.05)	D2 (диаметр внешней резьбы) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота головки) (±0.05)		
Винт S.H.A (S.H.A Screw)	ARIHS1804	2.0	M1.8x0.35P	9.4	3.5	1.2	Золотистый
	ARIHS1805	2.0	M1.8x0.35P	10.4	4.5	1.2	Машинная
	ARIHS1807	2.0	M1.8x0.35P	12.4	6.5	1.2	Зеленый
Масса – не более 0,145 г.							

24) Навигационный пин (Guide Pin)

Служит для фиксации Слепочного трансфера на имплантате, при снятии слепка.

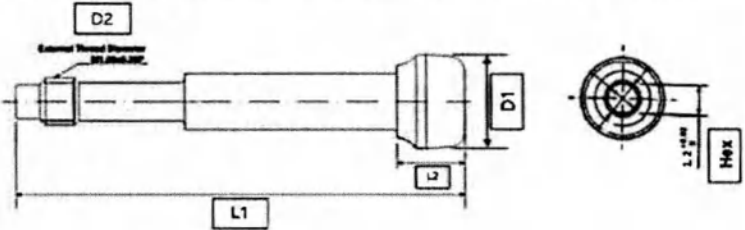Таблица 29.

Внешний вид	Схема 1
 AANGPT12H	

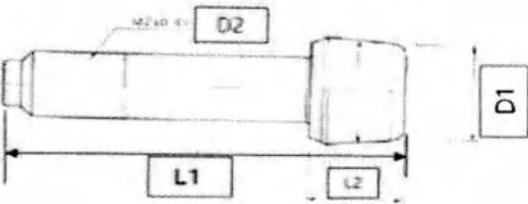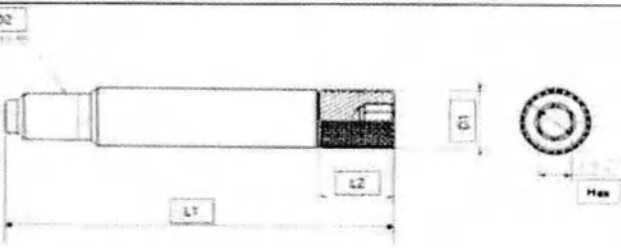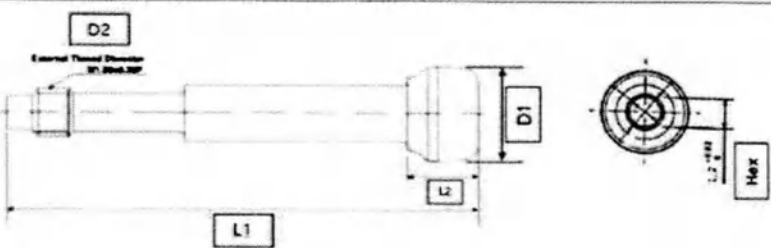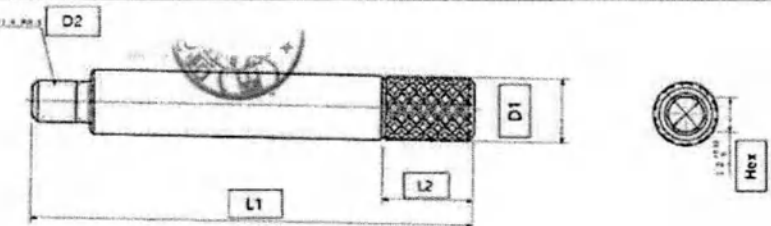
 AAOTGP10	
 AAOPGP10	
 AANGPP0010	
 MUAGP	

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				H (внутренний шестигранник), мм (+0.02)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр головки) (± 0.02)	D2 (диаметр винта) (± 0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (длина головки) (± 0.02)		
Навигационный пин (Guide Pin)	AANGPT12H	2.95	M1.80x0.35P	16.90	2.50	1.20	Машинная
	AANGPT16H	2.95	M1.80x0.35P	20.90	2.50	1.20	Машинная
	AANGPP0010	2.12	M1.80x0.35P	16.90	3.00	1.20	Машинная
	AANGPP0015	2.12	M1.80x0.35P	21.90	3.00	1.20	Машинная
	AANGPP0020	2.12	M1.80x0.35P	26.90	3.00	1.20	Машинная
	AAOPGP10	2.52	M2.0x0.4P	15.80	3.00	1.20	Машинная
	AAOPGP12	2.52	M2.0x0.4P	17.80	3.00	1.20	Машинная
	AAOTGP10	2.95	M2.0x0.4P	10.80	2.50	Н/Д	Машинная
	AAOTGP12	2.95	M2.0x0.4P	12.80	2.50	Н/Д	Машинная
	MUAGP	2.20	M1.4x0.3P	15.00	3.00	1.20	Машинная
Масса – не более 0,662 г.							

- Навигационный пин моделей MIGPT12, MIGPT16, MIGPP12, MIGPP16 служит для фиксации Слепочного трансфера для открытой и закрытой ложки на имплантате MiNi, при снятии слепка.

Внешний вид	Схема 2
-------------	---------

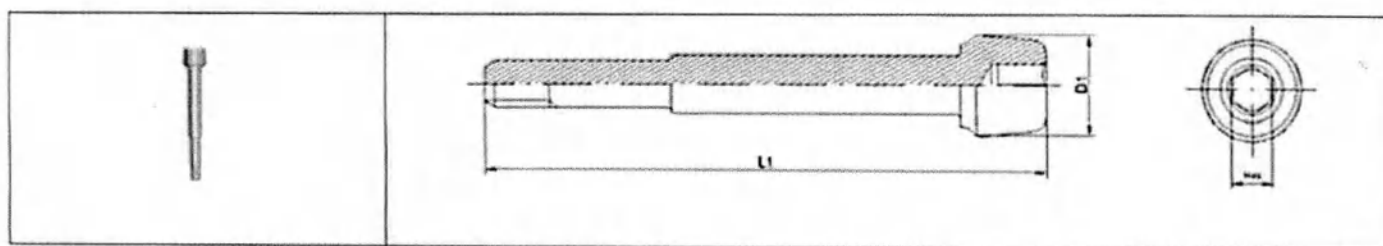

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм		Н (шестигранник), мм (+0.02)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр головки) (± 0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)		
Навигационный пин (Guide Pin)	MIGPT12	2.96	16.50	1.20	Машинная
	MIGPT16	2.96	20.50	1.20	Машинная
	MIGPP12	2.00	19.80	1.20	Машинная
	MIGPP16	2.00	23.80	1.20	Машинная
Масса – не более 0,508 г.					

25) Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)

Используется для обеспечения простого и точного переноса позиции имплантата на модель методом закрытой ложки. Трансфер бывает двух видов: двухкомпонентный (трансфер + навигационный пин, где трансфер фиксируется на имплантате или Окта абатменте с помощью пина во время отлива модели) и однокомпонентный трансфер (трансфер с резьбой в нижней части, для закручивания только на имплантате во время отлива модели).

Таблица 30.


Внешний вид	Схема 1
AANITN4012H	
AANITH4012	
AAOITO4010	

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм	Hex	Octa	Навигационн
--------------	--------	------------	-----	------	-------------

		D1 (диаметр интерфейса) (+0.02)	D2 (диаметр профиля) (-0.05)	D3 (диаметр внешней резьбы) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота трансфера) (±0.05)	(внешний шестигранный) мм (-0.01/- 0.02)	(внутренний осьмью гранник) мм	ый пин
Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)	AAITN4012H	2.80	4.00	M1.80x0.35P	16.60	12.0	1.2	Н/Д	Н/Д
	AAITN4016H	2.80	4.00	M1.80x0.35P	20.60	16.0	1.2	Н/Д	Н/Д
	AAITN5012H	2.80	4.00	M1.80x0.35P	16.60	12.0	1.2	Н/Д	Н/Д
	AAITN5016H	2.80	4.80	M1.80x0.35P	20.60	16.0	1.2	Н/Д	Н/Д
	AANITH4012	2.80	4.00	Н/Д	11.90	9.5	2.3	Н/Д	AANGPT12H
	AANITH4016	2.80	4.00	Н/Д	15.90	13.5	2.3	Н/Д	AANGPT16H
	AANITH5012	2.80	4.80	Н/Д	11.90	9.5	2.3	Н/Д	AANGPT12H
	AANITH5016	2.80	4.80	Н/Д	15.90	13.5	2.3	Н/Д	AANGPT16H
	AANITH6012	2.80	5.80	Н/Д	11.90	9.5	2.3	Н/Д	AANGPT12H
	AANITH7012	2.80	6.80	Н/Д	11.90	9.5	2.3	Н/Д	AANGPT12H
	AAOITO4010	3.00	4.00	Н/Д	7.50	Н/Д	Н/Д	3.01	AAOTGP10
	AAOITN4010	3.00	4.00	Н/Д	7.50	Н/Д	Н/Д	Н/Д	AAOTGP10
	AAOITO4012	3.00	4.00	Н/Д	9.50	Н/Д	Н/Д	3.01	AAOTGP12
	AAOITN4012	3.00	4.00	Н/Д	9.50	Н/Д	Н/Д	Н/Д	AAOTGP12
	AAOITO5010	3.00	5.00	Н/Д	7.50	Н/Д	Н/Д	3.01	AAOTGP10
	AAOITN5010	3.00	5.00	Н/Д	7.50	Н/Д	Н/Д	Н/Д	AAOTGP10
	AAOITO5012	3.00	5.00	Н/Д	9.50	Н/Д	Н/Д	3.01	AAOTGP12
	AAOITN5012	3.00	5.00	Н/Д	9.50	Н/Д	Н/Д	Н/Д	AAOTGP12
Обработка поверхности - машинная									
Масса – не более 2.010 г.									

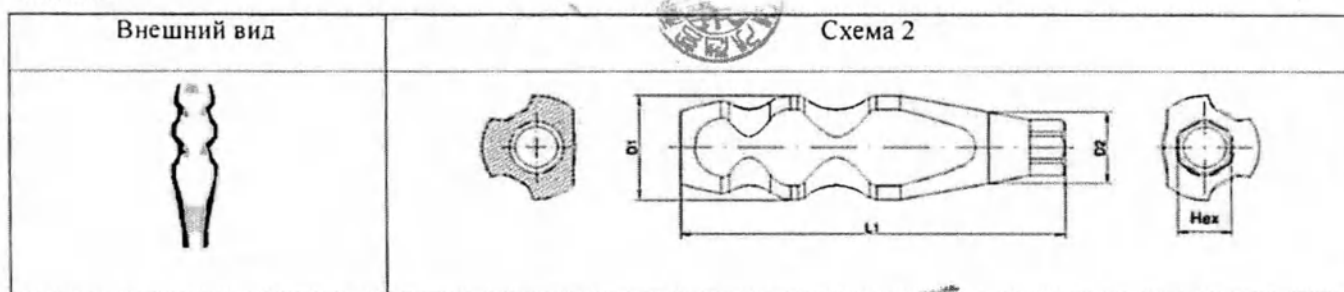- Трансфер слепочный для закрытой ложки моделей МПТ3512Н, МПТ3516Н используется для обеспечения простого и точного переноса позиции имплантата MiNi на модель методом закрытой ложки.







Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Н (внешний шестигранник) мм (-0.01/-0.02)	Навигаци онный пин
		D1 (диаметр интерфейса) (+0.02)	D2 (диаметр профиля) (-0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)		
Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping Transfer)	МПТ3512Н	3.50	2.38	12.20	1.70	MIGPT12
	МПТ3516Н	3.50	2.38	16.20	1.70	MIGPT16
	Обработка поверхности - машинная					
	Масса – не более 0,851 г.					

26) Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coping, Pick-up)

Используется для обеспечения простого и точного переноса позиции имплантата, Оста абатмента или абатмента Multi-unit на модель методом открытой ложки. Трансфер слепочный для открытой ложки всегда идет в комплекте с навигационным пином, который закрепляет трансфер на имплантате или Оста абатменте во время отливки модели. Трансфер также используются для снятия слепков с мульти-юнит абатмента методом открытой ложки для последующего изготовления финального протеза.

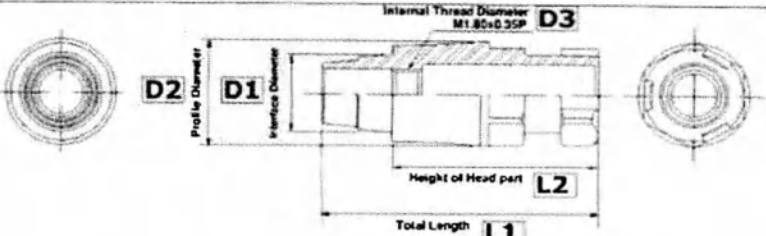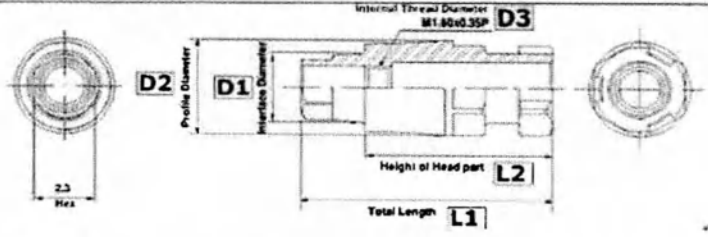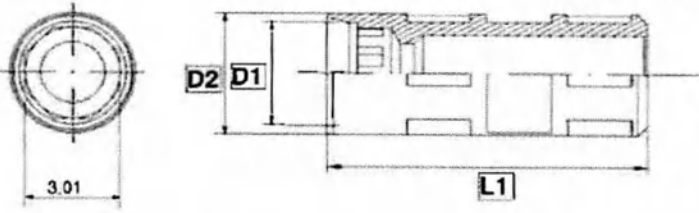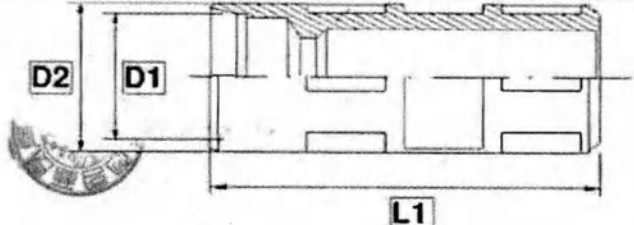Таблица 31.


Внешний вид	Схема 1
 AANIPH4007	
 AANIPN4007	
 AAOIPO4010	
 AAOIPN4010	
 MUAIC	

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм					Н (внешний шестигранник) мм (±0.01/-0.02)	Оста (внутренний восьмигранник) мм	Навигационный пин
		D1 (диаметр интерфейса) (+0.02)	D2 (диаметр профиля) (-0.05)	D3 (диаметр внутренний резьбы) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота трансфера) (±0.05)			
Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coping, Pick- up)	AANIPH4007	2.80	3.80	M1.80x0.35P	9.40	7.00	2.30	Н/Д	AANGPP0010
	AANIPN4007	2.80	3.80	M1.80x0.35P	9.40	7.00	Н/Д	Н/Д	AANGPP0010
	AANIPH4012	2.80	3.80	M1.80x0.35P	14.40	12.00	2.30	Н/Д	AANGPP0015
	AANIPN4012	2.80	3.80	M1.80x0.35P	14.40	12.00	Н/Д	Н/Д	AANGPP0015
	AANIPH4016	2.80	3.50	M1.80x0.35P	18.40	12.50	2.30	Н/Д	AANGPP0020
	AANIPN4016	2.80	3.50	M1.80x0.35P	18.40	12.50	Н/Д	Н/Д	AANGPP0020
	AANIPH5007	2.80	4.80	M1.80x0.35P	9.40	7.00	2.30	Н/Д	AANGPP0010
	AANIPN5007	2.80	4.80	M1.80x0.35P	9.40	7.00	Н/Д	Н/Д	AANGPP0010
	AANIPH5012	2.80	4.80	M1.80x0.35P	14.40	12.00	2.30	Н/Д	AANGPP0015
	AANIPN5012	2.80	4.80	M1.80x0.35P	14.40	12.00	Н/Д	Н/Д	AANGPP0015
	AANIPH6007	2.80	5.80	M1.80x0.35P	9.40	7.00	2.30	Н/Д	AANGPP0010
	AANIPH6012	2.80	5.80	M1.80x0.35P	14.40	12.00	2.30	Н/Д	AANGPP0015

AANIPN6007	2.80	5.80	M1.80x0.35P	9.40	7.00	H/Д	H/Д	AANGPP0010
AANIPN6012	2.80	5.80	M1.80x0.35P	14.40	12.00	H/Д	H/Д	AANGPP0015
AANIPH7007	2.80	6.80	M1.80x0.35P	9.40	7.00	2.30	H/Д	AANGPP0010
AANIPH7012	2.80	6.80	M1.80x0.35P	14.40	12.00	2.30	H/Д	AANGPP0015
AANIPN7007	2.80	6.80	M1.80x0.35P	9.40	7.00	H/Д	H/Д	AANGPP0010
AANIPN7012	2.80	6.80	M1.80x0.35P	14.40	12.00	H/Д	H/Д	AANGPP0015
AAOIPO4010	3.40	4.00	H/Д	10.00	H/Д	H/Д	3.01	AAOPGP10
AAOIPN4010	3.40	4.00	H/Д	10.00	H/Д	H/Д	H/Д	AAOPGP10
AAOIPO4012	3.40	4.00	H/Д	12.00	H/Д	H/Д	3.01	AAOPGP12
AAOIPN4012	3.40	4.00	H/Д	12.00	H/Д	H/Д	H/Д	AAOPGP12
AAOIPO5010	3.60	5.00	H/Д	10.00	H/Д	H/Д	3.01	AAOPGP10
AAOIPN5010	3.60	5.00	H/Д	10.00	H/Д	H/Д	H/Д	AAOPGP10
AAOIPO5012	3.60	5.00	H/Д	12.00	H/Д	H/Д	3.01	AAOPGP12
AAOIPN5012	3.60	5.00	H/Д	12.00	H/Д	H/Д	H/Д	AAOPGP12
MUAIC	4.80	2.25	H/Д	10.70	H/Д	H/Д	H/Д	MUAGP
Обработка поверхности - машинная								
Масса – не более 1.598 г.								

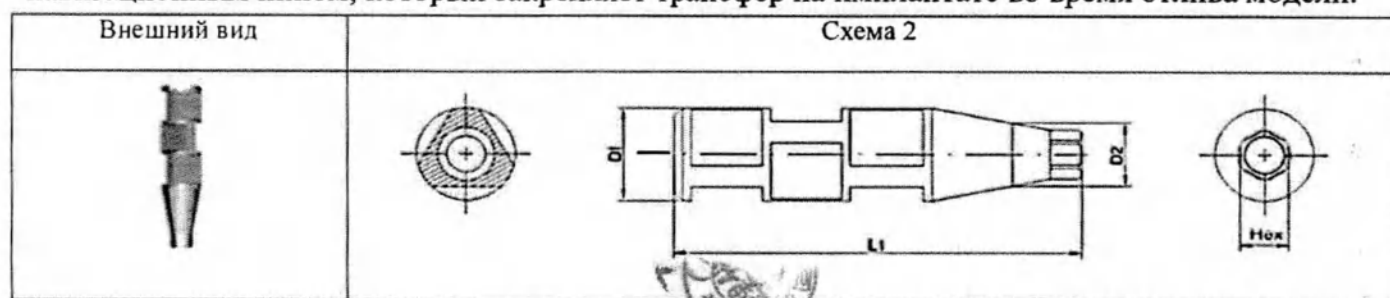Трансфер слепочный для открытой ложки моделей МІР3512Н, МІР3516Н используется для обеспечения простого и точного переноса позиции имплантата MiNi на модель методом открытой ложки. Трансфер слепочный для открытой ложки всегда идет в комплекте с навигационным пином, который закрепляет трансфер на имплантате во время отлива модели.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Н (внешний шестигранный) мм (-0.01/-0.02)	Обработка поверхности	Навигаци онный пин
		D1 (диаметр интерфейса) (+0.02)	D2 (диаметр профиля) (-0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)			
Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coping Pick-up)	МІР3512Н	3.50	2.38	14.20	1.70	Машинная	MIGPP12
	МІР3516Н	3.50	2.38	18.20	1.70	Машинная	MIGPP16
Масса – не более 0,593 г.							

27) Трансфер слепочный металлический (Stainless Impression Coping Pick-up)

Используется для снятия слепков с абатмента Meg-Rhein с целью изготовления съемной конструкции.

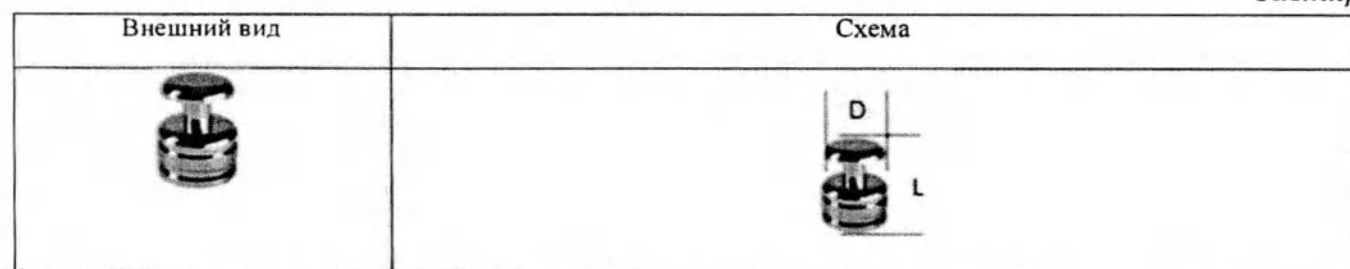Таблица 32.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм		Обработка поверхности
		D (общий диаметр) (±0.05)	L (общая длина) (±0.05)	
Трансфер слепочный металлический	044CAIN	4.0	5.55	Машинная

28) Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)

Используются для снятия слепков методом закрытой ложки с уровня абатмента EZ Post. Трансфер слепочный пластиковый используется для переноса положения абатмента из ротовой полости пациента на гипсовую модель.

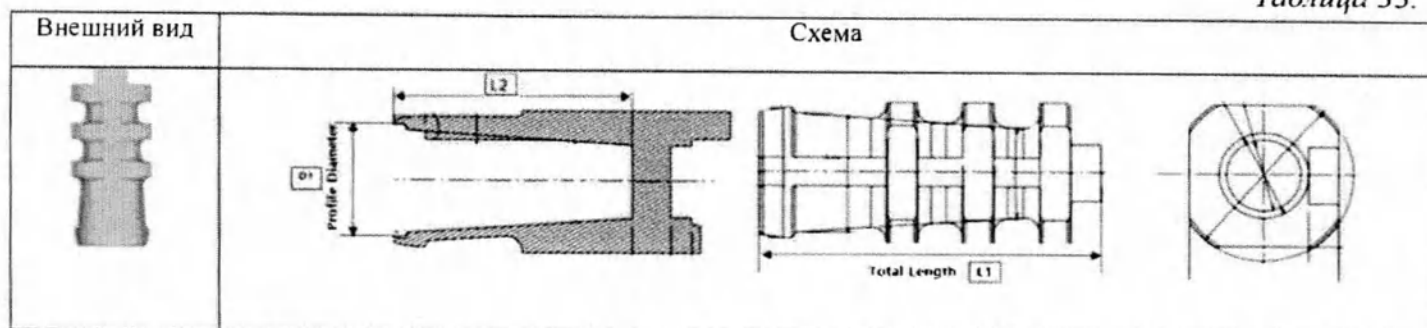Таблица 33.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Цвет маркировки
		D1 (диаметр профиля) (± 0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (глубина соединения) (± 0.05)	
Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)	AANSIF440	4.00	11.30	8.00	Желтый
	AANSIF455	4.00	11.30	8.00	Белый
	AANSIF470	4.00	11.30	8.00	Розовый
	AANSIF540	5.00	11.30	8.00	Желтый
	AANSIF555	5.00	11.30	8.00	Белый
	AANSIF570	5.00	11.30	8.00	Розовый
	AANSIF640	6.00	11.30	8.00	Желтый
	AANSIF655	6.00	11.30	8.00	Белый
	AANSIF670	6.00	11.30	8.00	Розовый
	AANSIF740	7.00	11.30	8.00	Желтый
	AANSIF755	7.00	11.30	8.00	Белый
	AANSIF770	7.00	11.30	8.00	Розовый
Масса – не более 0,190 г.					





29) Аналог лабораторный (Lab Analog)

Используется для переноса позиции имплантата или абатмента из полости рта на гипсовую модель. Для протезирования с уровня имплантата или с уровня абатмента.

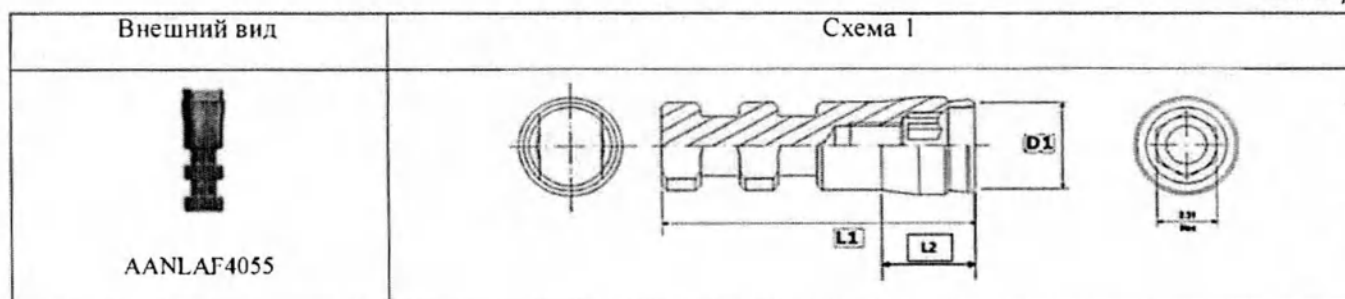Таблица 34.



AANLAF4055

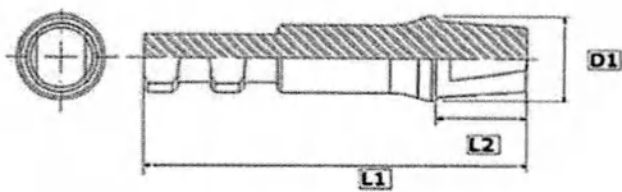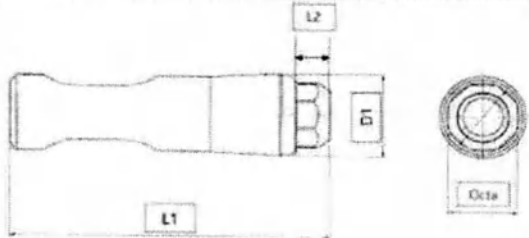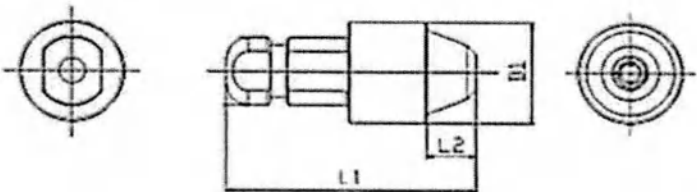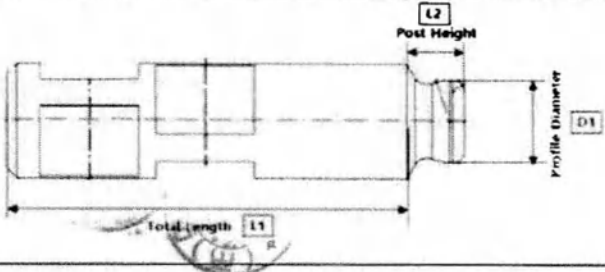
 AANS LF440	
 AANOLA4000	
 MUALA	
 PLA	

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм					Цвет анодизации/ Обработка поверхности
		D1 (диаметр профиля) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота головки) (±0.05)	Hex (внутренний шестигранник) (±0.01/-0.02)	Octa (внешний восьмигранник) (-0.01)	
Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANLAF35	3.10	12.0	3.50	2.31	Н/Д	Фиолетовый
	AANLAF4055	3.10	12.0	3.50	2.31	Н/Д	Синий
	AALLAF6080	3.10	12.0	3.50	2.31	Н/Д	Золотистый
	AANS LF440	4.00	17.00	4.00	Н/Д	Н/Д	Машинная
	AANS LF455	4.00	18.50	5.50	Н/Д	Н/Д	Машинная
	AANS LF470	4.00	20.00	7.00	Н/Д	Н/Д	Машинная
	AANS LF540	5.00	17.00	4.00	Н/Д	Н/Д	Машинная
	AANS LF555	5.00	18.50	5.50	Н/Д	Н/Д	Машинная
	AANS LF570	5.00	20.00	7.00	Н/Д	Н/Д	Машинная
	AANS LF640	6.00	17.00	4.00	Н/Д	Н/Д	Машинная
	AANS LF655	6.00	18.50	5.50	Н/Д	Н/Д	Машинная
	AANS LF670	6.00	20.00	7.00	Н/Д	Н/Д	Машинная
	AANS LF740	7.00	17.00	4.00	Н/Д	Н/Д	Машинная
	AANS LF755	7.00	18.50	5.50	Н/Д	Н/Д	Машинная
	AANS LF770	7.00	20.00	7.00	Н/Д	Н/Д	Машинная
	AANOLA4000	3.80	14.0	1.50	Н/Д	3.00	Машинная
	IOA300	4.80	14.0	1.50	Н/Д	3.00	Машинная
	MUALA	4.80	11.2	2.20	Н/Д	Н/Д	Машинная
	PLA	2.50	12.00	1.70	Н/Д	Н/Д	Машинная

Масса – не более 1,010 г.

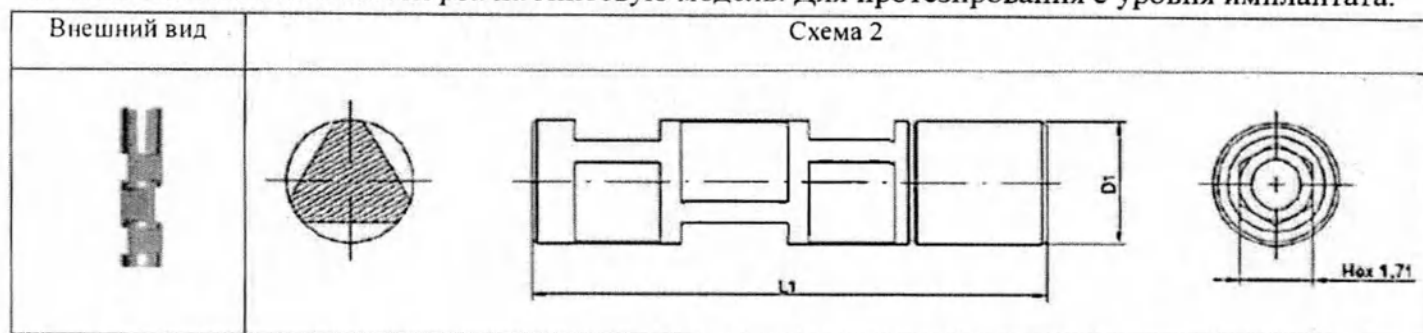- Аналог лабораторный (Lab Analog) модели MILA300H используется для переноса позиции имплантата MiNi из полости рта на гипсовую модель. Для протезирования с уровня имплантата.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм		Н (внутренний шестигранник) мм (-0.01/-0.02)	Обработка поверхности
		D1 (общий диаметр) (+0.02)	L1 (общая длина) (+0.05)		
Аналог лабораторный (Lab Analog)	MILA300H	3.00	12.00	1.71	Машинная
Масса – не более 0.275 г.					

30) Аналог RP (RP Analog)

Используется для переноса позиции имплантата из полости рта или абатмента при цифровом протоколе.

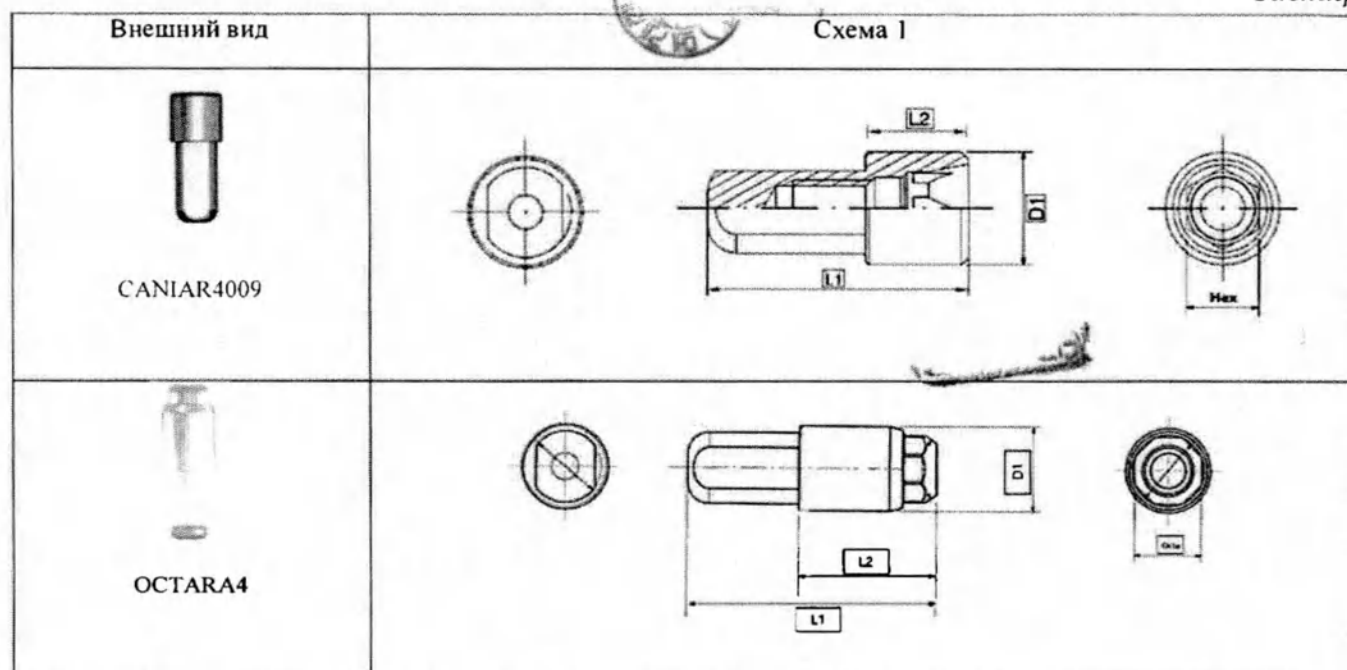Таблица 35.



Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Нех (внутренний шестигранник) (±0.01/-0.02)	Оста (внешний восьмигранный) (±0.01/-0.02)	Обработка поверхности
		D1(диаметр профиля) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (длина головки) (±0.05)			
Аналог RP (RP Analog)	CANIAR4009	4.00	9.00	3.50	2.31	Н/Д	Машинная
	OCTARA4	3.80	11.00	6.05	Н/Д	3.00	Машинная
	OCTARA5	4.80	11.00	6.05	Н/Д	3.00	Машинная
Масса – не более 0,710 г.							

- Аналог RP (RP Analog) модель СМІІАН3009, используется для для переноса позиции имплантата MiNi из полости рта при цифровом протоколе.

Внешний вид	Схема 2

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Hex (внутренний шестигранник) мм (-0.01/-0.02)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр профиля) (+0.02)	L1 (общая длина) (-0.05)	L2 (длина головки) (± 0.05)		
Аналог RP (RP Analog)	СМІІАН3009	3.00	9.00	3.50	1.71	Машинная
Масса – не более 0,298 г						

31) Цилиндр временный (Temporary Cylinder)

Используется для изготовления временной акриловой конструкции с винтовой фиксацией. Устанавливается на абатмент Multi-unit, абатмент Multi-unit угловой и абатмент Окта. В верхней части изделия имеется ребристая поверхность, что позволяет лучше удерживать пластмассу или воск.

Таблица 36.

Внешний вид	Схема
 С восьмигранником Без восьмигранника	
 MUATC	

Размеры:



Наименование	Модель	Размер, мм			Окта (внутренний восьмигранник) ($\pm 0.01/-0.02$)	Винт	Обработка поверхности и
		D1 (диаметр профиля (± 0.05))	L1 (общая длина) (± 0.05))	L2 (высота ответной части) (± 0.05))			
Цилиндр временный (Temporary Cylinder)	AANOTCO4010	3.8	10.0	7.0	3.01	IRCS200	Машинная
	AANOTCO5010	4.8	10.0	7.0	3.01	IRCS200	Машинная
	AANOTCN4010	3.8	10.0	7.0	Н/Д	IRCS200	Машинная

	AANOTCN5010	3.8	10.0	7.0	Н/Д	IRCS200	Машинная
	MUATC	4.0	12.0	8.5	Н/Д	MUAS	Машинная
Масса – не более 0,272 г.							

32) Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)

Используется для формирования восковой модели каркаса при изготовлении реставрации на абатменте EZ Post, с высокой точностью. Полностью выпаривается при отливке реставрации. Формирование восковой модели каркаса происходит на гипсовой модели с использованием лабораторного аналога абатмента.

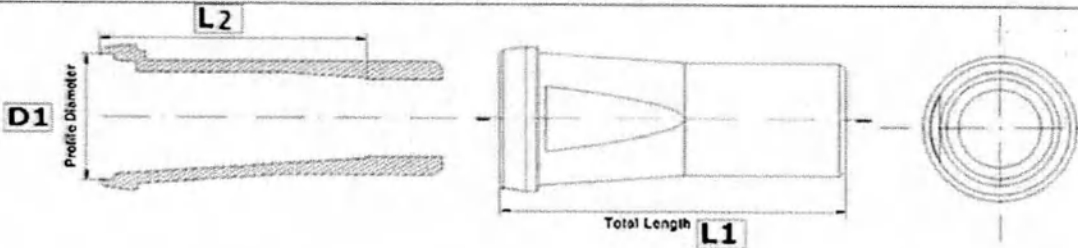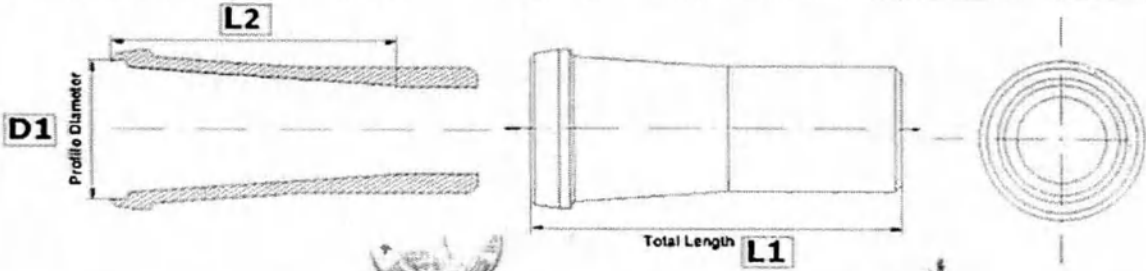Таблица 37.

Внешний вид	Схема
 ОДИНОЧНЫЙ	
 МОСТОВИДНЫЙ	

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм			Тип	Цвет маркировки
		D1 (диаметр профиля) (+0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (глубина соединения) (± 0.05)		
Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)	AANBCB470	4.00	10.30	8.00	Одиночный	Белый
	AANBCB570	5.00	10.30	8.00	Одиночный	Белый
	AANBCB670	6.00	10.30	8.00	Одиночный	Белый
	AANBCB770	7.00	10.30	8.00	Одиночный	Белый
	AANBCS470	4.00	10.30	8.00	Мостовидный	Красный
	AANBCS570	5.00	10.30	8.00	Мостовидный	Красный
	AANBCS670	6.00	10.30	8.00	Мостовидный	Красный
	AANBCS770	7.00	10.30	8.00	Мостовидный	Красный
Масса – не более 0,110 г.						

33) Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder)

Соединяется с абатментом Osta и используется для изготовления финальных реставраций с комбинированной или цементной фиксацией. Цилиндр с восьмигранником используется для изготовления одиночных конструкций, без восьмигранника для изготовления мостовидных конструкций. Фиксируется винтом абатмента.

Таблица 38.

Внешний вид	Схема
-------------	-------

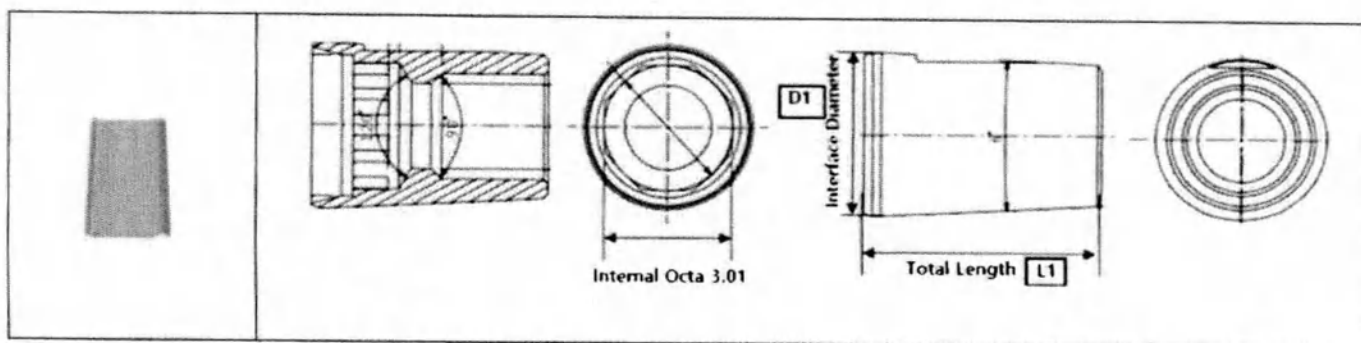

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм		Оста (внутренний восьмигранник) ($\pm 0.01/-0.02$)	Цвет анодизации
		D1 (диаметр профиля) ($+0.05$)	L1 (общая длина) (± 0.05)		
Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder)	AAOECO4005	3.80	5.50	3.01	Золотистый
	AAOECO4007	3.80	7.00	3.01	Золотистый
	AAOECO5005	4.80	5.50	3.01	Золотистый
	AAOECO5007	4.80	7.00	3.01	Золотистый
	AAOECN4005	3.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AAOECN4007	3.80	7.00	Н/Д	Золотистый
	AAOECN5005	4.80	5.50	Н/Д	Золотистый
	AAOECN5007	4.80	7.00	Н/Д	Золотистый
В состав упаковки входит Винт абатмента (Abutment Screw) IRCS200					
Масса – не более 0,310 г.					

34) Цилиндр CCM (CCM Cylinder)

Соединяется с абатментом Оста, абатментом Multi-unit и абатментом Multi-unit угловой и используется для изготовления финальных реставраций с винтовой фиксацией или для изготовления индивидуальных абатментов с винтовой фиксацией.

Таблица 39.

Внешний вид	Схема
 С восьмигранником Без восьмигранника	

Размеры:




Наименование	Модель	Размер, мм			Оста (внутренний восьмигранник) (± 0.01)	Винт	Цвет маркировки
		D1 (диаметр профиля) (-0.05)	L1 (общая длина) (± 0.02)	L2 (высота цилиндра) (± 0.05)			
Цилиндр CCM	AANCCO4000	4.00	12.00	10.00	3.01	IRCS200	Розовый

(CCM Cylinder)	AANCCN4000	4.00	12.00	10.00	Н/Д	IRCS200	Желтый
	AANCCO5000	5.00	12.00	10.00	3.01	IRCS200	Розовый
	AANCCN5000	5.00	12.00	10.00	Н/Д	IRCS200	Желтый
	MUACCM	4.80	15.00	13.00	Н/Д	MUAS	Желтый
Масса – не более 0,350 г.							

35) Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder)

Используется для соединения с абатментом Osta и изготовления финальных реставраций с винтовой фиксацией с уровня абатмента Osta.

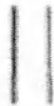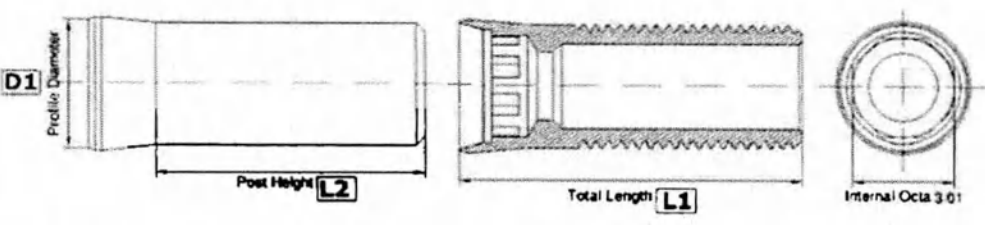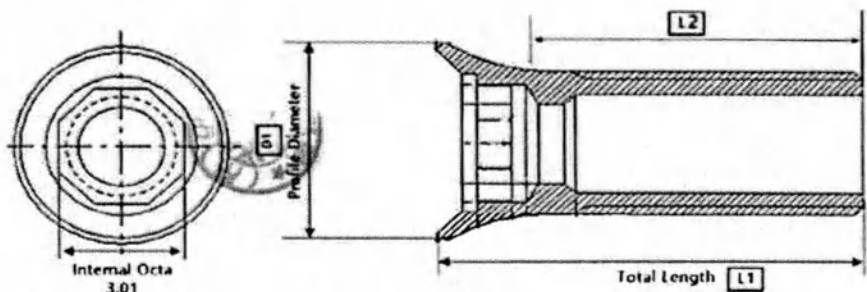Таблица 40.

Внешний вид	Схема
 С восьмигранником  Без восьмигранника	
 С восьмигранником  Без восьмигранника	

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм			Osta (внутренний восьмигранник к) ($\pm 0.01/-0.02$)	Цвет маркировки
		D1 (диаметр профиля) (-0.05)	L1 (общая длина) (± 0.02)	L2 (высота цилиндра) (± 0.05)		
Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder)	AAOTCO4010	3.80	10.00	8.00	3.01	Красный
	AAOTCN4010	3.80	10.00	8.00	Н/Д	Белый
	ЮРН100	4.80	10.00	8.00	3.01	Красный
	ЮРН100	4.80	10.00	8.00	Н/Д	Белый
В состав упаковки входит винт абатмента (Abutment Screw) IRCS200						
Масса – не более 0.125 г.						

36) Колпачок защитный (Comfort Cap)

Используется для защиты абатмента EZ Post после снятия слепка с помощью Слепочного трансфера пластикового и минимизирует раздражение языка и окружающих мягких тканей.

Таблица 41.

Внешний вид	Схема
-------------	-------

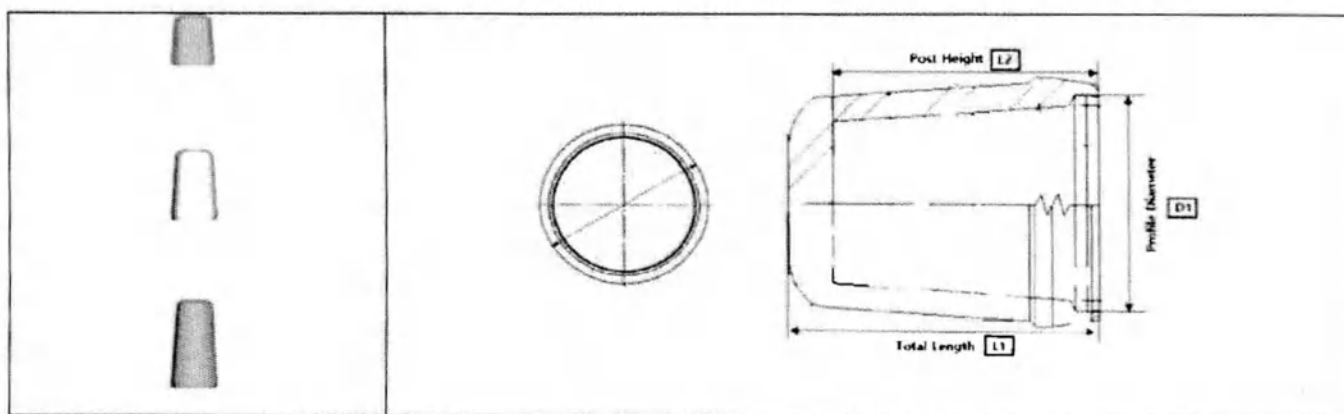

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм			Цвет маркировки
		D1 (диаметр профиля) (+0.04)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота абатмента) (+0.05)	
Колпачок защитный (Comfort Cap)	AANCCF440	4.00	5.40	4.60	Желтый
	AANCCF455	4.00	6.90	6.10	Белый
	AANCCF470	4.00	8.40	7.60	Розовый
	AANCCF540	5.00	5.40	4.60	Желтый
	AANCCF555	5.00	6.90	6.10	Белый
	AANCCF570	5.00	8.40	7.60	Розовый
	AANCCF640	6.00	5.40	4.60	Желтый
	AANCCF655	6.00	6.90	6.10	Белый
	AANCCF670	6.00	8.40	7.60	Розовый
	AANCCF740	7.00	5.40	4.60	Желтый
	AANCCF755	7.00	6.90	6.10	Белый
	AANCCF770	7.00	8.40	7.60	Розовый
	Масса – не более 0.074 г.				

37) Колпачок предохраняющий (Healing Cap)

Используется для защиты абатмента Оста и абатмента Multi-unit, уменьшения раздражения языка и слизистой оболочки полости рта в период заживления десны или изготовления протеза.

Таблица 42.

Внешний вид	Схема
 AANONC4000	
 IHC400	
 MUAHC	

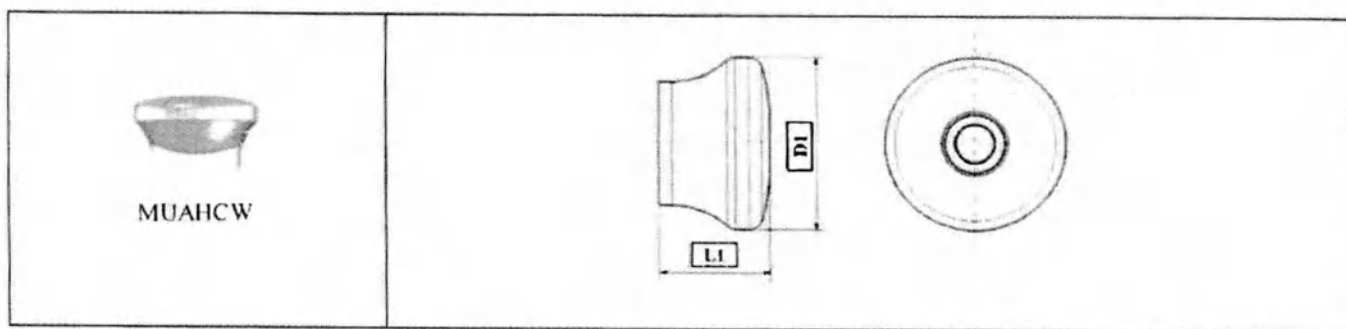


Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм		Винт	Обработка поверхности
		D1 (диаметр профиля) (-0.05)	L1 (общая длина) (+0.05)		
Колпачок предохраняющий (Healing Cap)	AANOHC4000	4.00	3.75	IRCS200	Машинная
	IHC400	5.20	3.65	IRCS200	Машинная
	MUAHC	4.90	4.20	MUAS	Машинная
	MUAHCW	6.80	4.20	MUAS	Машинная
Масса – не более 0,420 г.					

38) Скан пост (Scan Post)

Устанавливается на сканируемый формирователь десны, для четкого переноса положения имплантата в полости рта пациента с уровня формирователя десны во время сканирования интраоральным сканнером.

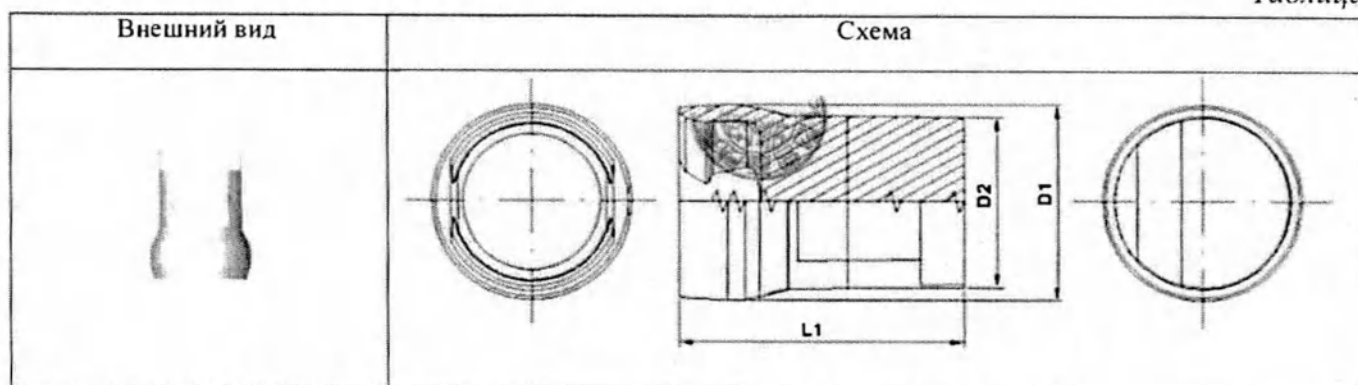Таблица 43.



Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм			Цвет маркировки
		D1 (диаметр профиля) (+0.04)	D2 (диаметр интерфейса) (± 0.05)	L1 (общая высота) (+0.05)	
Скан пост (Scan Post)	SP4007	4.90	4.00	6.50	Белый
	SP5007	5.40	4.00	6.50	Белый
	SP6007	6.30	4.00	6.50	Белый
	SP7007	7.30	4.00	6.50	Белый
Масса – не более 0.2 г.					

39) Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap)

Служит опорой для временной реставрации. Временная реставрация формируется поверх колпачка предохраняющего абатмента, который затем фиксируется на абатменте предохраняющем с помощью цемента.

Таблица 44.

Внешний вид	Схема
-------------	-------

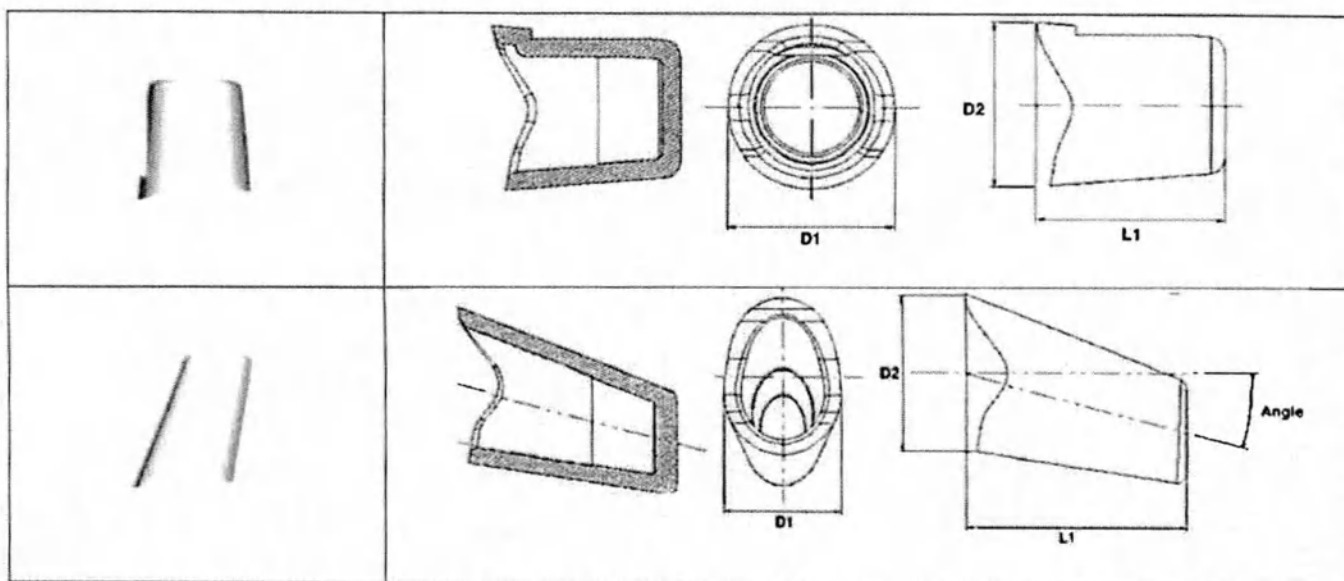

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Цвет маркировки
		D1 (диаметр профиля) (+0.04)	D2 (диаметр интерфейса) (± 0.05)	L1 (общая высота) (+0.05)	Angle (Угол)	
Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap)	AFCP	5.27	5.43	5.93	Н/Д	Белый
	AFCA15	4.20	5.54	7.76	15	Белый
	AFCA25	4.20	5.54	7.76	25	Белый
Масса – не более 0,064 г.						

40) Металлическая матрица с ретенционным кольцом (Metal Housing)

Используется как соединяющий элемент между абатментом Meg-Ball и съемным протезом. В матрице уже установлено ретенционное кольцо в процессе производства.

Таблица 45.

Внешний вид	Схема

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм			Обработка поверхности
		A (диаметр профиля) (+0.04)	B (общая высота) (± 0.05)	C (внутренний диаметр кольца) (+0.05)	
Металлическая матрица с ретенционным кольцом (Metal Housing)	MBHR	5.00	4.00	1.50	Машинная
Масса – не более 0,116 г					

41) Ретенционное кольцо (Retentive Ring)

Ретенционное кольцо устанавливается в Металлическую матрицу, а затем эта конструкция устанавливается на абатмент Meg-Ball.

Таблица 46.

Внешний вид	Схема
-------------	-------

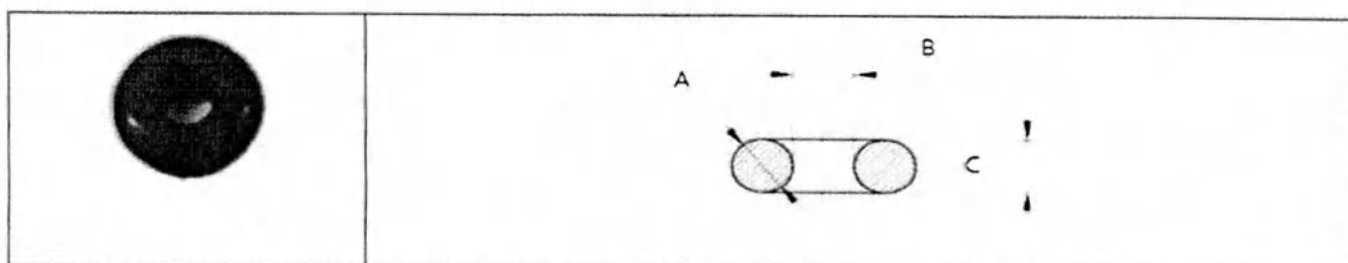


Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм		
		A (диаметр окружности кольца) (+0.04)	B (внутренний диаметр кольца) (± 0.05)	C (высота кольца) (+0.05)
Ретенционное кольцо (Retentive Ring)	MBR	1.50	1.50	1.50
	MBR	1.50	1.50	1.50
	Масса – не более 0,102 г.			

42) Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)

Устанавливается на ретенционный колпачок на Абатменте Meg-Rhein и защищает целостность колпачка. Соединяет съемную конструкцию с абатментом. Компенсирует больший угол наклона имплантата по отношению к положению съемной конструкции.

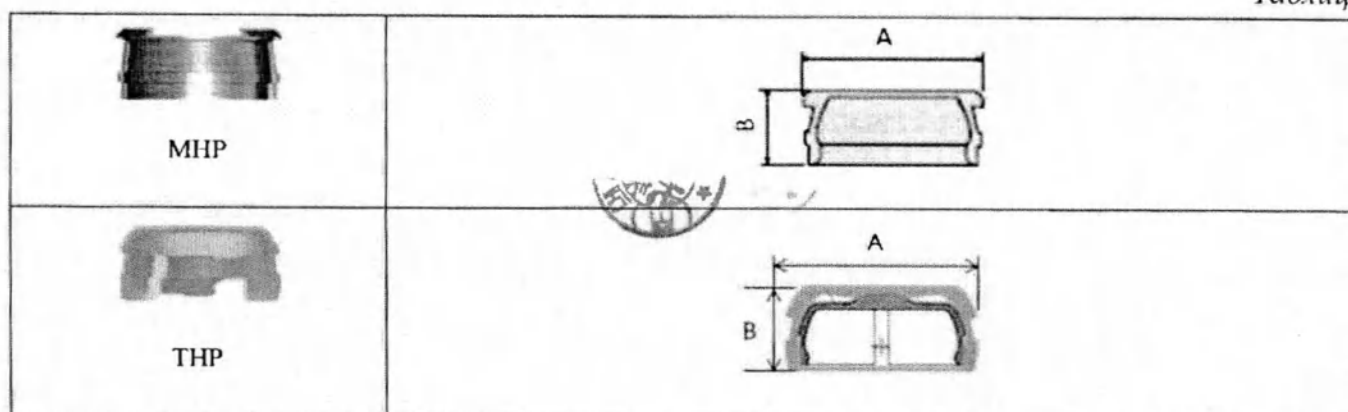Таблица 47.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм		Обработка поверхности / Цвет анодизации
		A (диаметр профиля) (+0.04)	B (общая высота) (± 0.05)	
Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)	MHR	4.50	2.00	Машинная
	THR	4.90	2.65	Желтый
	Масса – не более 0,102 г.			

43) Колпачок ретенционный (Retentive Cap)

Устанавливается на абатмент Meg-Rhein. В зависимости от требуемой силы ретенции подбирается необходимый колпачок для дальнейшей фиксации в матрице металлической, предустановленной в съемный протез.

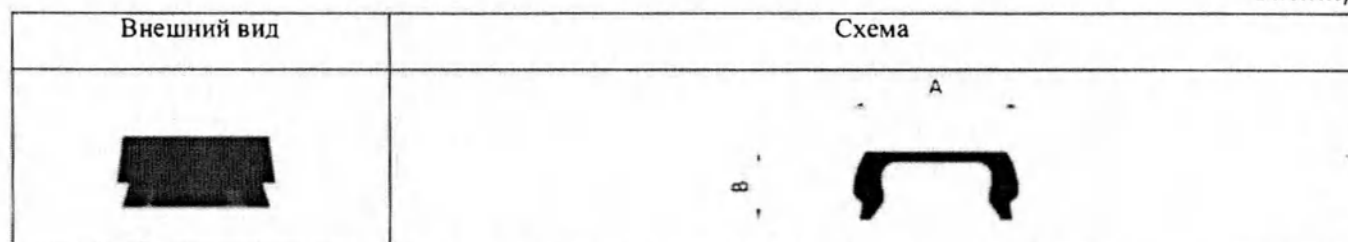Таблица 48.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм		Цвет маркировки
		А (диаметр профиля) (± 0.04)	В (Общая высота) (± 0.05)	
Колпачок ретенционный (Retentive Cap)	RCWP	3.80	1.70	Н/Д
	RCVP	3.80	1.70	Фиолетовый
	RCPP	3.80	1.70	Розовый
	RCYP	3.80	1.70	Желтый
	RCBP	3.80	1.70	Черный
Масса – не более 0,064 г.				

9.4 Характеристики Формирователя десны (Healing Abutment)

1) Формирователь десны (Healing Abutment) помогает сформировать необходимый контур мягких тканей в период заживления десны. Используется при одно- или двухэтапной хирургии.

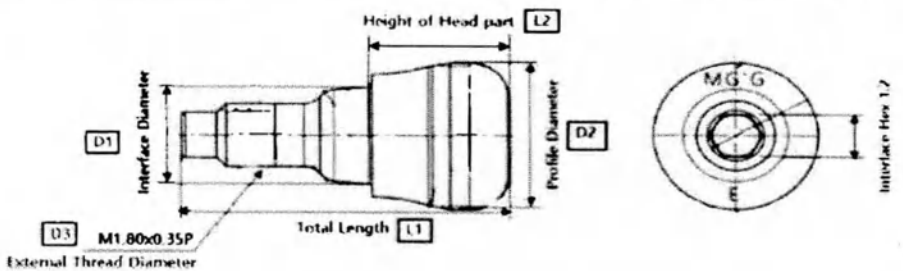Таблица 49.


Внешний вид	Схема 1
	

Размеры

Наименование	Модель	Размер, мм					Нех (внутренний шестигранный) мм (-0.01/-0.02)	Лазерная маркировка
		D1 (диаметр интерфейса) (± 0.02)	D2 (диаметр профиля) (± 0.05)	D3 (диаметр наружной резьбы) (± 0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (высота головки) (± 0.05)		
Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0403	2.80	4.20	M1.80x0.35P	8.40	3.50	1.20	MGG 403
	AANHAF0404	2.80	4.20	M1.80x0.35P	9.40	4.50	1.20	MGG 404
	AANHAF0405	2.80	4.20	M1.80x0.35P	10.40	5.50	1.20	MGG 405
	AANHAF0406	2.80	4.20	M1.80x0.35P	11.40	6.50	1.20	MGG 406
	AANHAF0407	2.80	4.20	M1.80x0.35P	12.40	7.50	1.20	MGG 407
	AANHAF0408	2.80	4.20	M1.80x0.35P	13.40	8.50	1.20	MGG 408
	AANHAF0409	2.80	4.20	M1.80x0.35P	14.40	9.50	1.20	MGG 409
	AANHAF0503	2.80	5.20	M1.80x0.35P	8.40	3.50	1.20	MGG 503
	AANHAF0504	2.80	5.20	M1.80x0.35P	9.40	4.50	1.20	MGG 504
	AANHAF0505	2.80	5.20	M1.80x0.35P	10.40	5.50	1.20	MGG 505
	AANHAF0506	2.80	5.20	M1.80x0.35P	11.40	6.50	1.20	MGG 506
	AANHAF0507	2.80	5.20	M1.80x0.35P	12.40	7.50	1.20	MGG 507
	AANHAF0508	2.80	5.20	M1.80x0.35P	13.40	8.50	1.20	MGG 508
	AANHAF0509	2.80	5.20	M1.80x0.35P	14.40	9.50	1.20	MGG 509
	AANHAF0603	2.80	6.20	M1.80x0.35P	8.40	3.50	1.20	MGG 603
	AANHAF0604	2.80	6.20	M1.80x0.35P	9.40	4.50	1.20	MGG 604
	AANHAF0605	2.80	6.20	M1.80x0.35P	10.40	5.50	1.20	MGG 605
	AANHAF0606	2.80	6.20	M1.80x0.35P	11.40	6.50	1.20	MGG 606
	AANHAF0607	2.80	6.20	M1.80x0.35P	12.40	7.50	1.20	MGG 607
	AANHAF0608	2.80	6.20	M1.80x0.35P	13.40	8.50	1.20	MGG 608
	AANHAF0609	2.80	6.20	M1.80x0.35P	14.40	9.50	1.20	MGG 609
	AANHAF0703	2.80	7.20	M1.80x0.35P	8.40	3.50	1.20	MGG 703
	AANHAF0704	2.80	7.20	M1.80x0.35P	9.40	4.50	1.20	MGG 704
	AANHAF0705	2.80	7.20	M1.80x0.35P	10.40	5.50	1.20	MGG 705
	AANHAF0706	2.80	7.20	M1.80x0.35P	11.40	6.50	1.20	MGG 706
	AANHAF0707	2.80	7.20	M1.80x0.35P	12.40	7.50	1.20	MGG 707
	AANHAF0708	2.80	7.20	M1.80x0.35P	13.40	8.50	1.20	MGG 708
	AANHAF0709	2.80	7.20	M1.80x0.35P	14.40	9.50	1.20	MGG 709

AANHAF0803	2.80	8.00	M1.80x0.35P	8.40	3.50	1.20	MGG 803
AANHAF0804	2.80	8.00	M1.80x0.35P	9.40	4.50	1.20	MGG 804
AANHAF0805	2.80	8.00	M1.80x0.35P	10.40	5.50	1.20	MGG 805
AANHAF0806	2.80	8.00	M1.80x0.35P	11.40	6.50	1.20	MGG 806
AANHAF0807	2.80	8.00	M1.80x0.35P	12.40	7.50	1.20	MGG 807
AANHAF0808	2.80	8.00	M1.80x0.35P	13.40	8.50	1.20	MGG 808
AANHAF0809	2.80	8.00	M1.80x0.35P	14.40	9.50	1.20	MGG 809
AANHAF1003	2.80	10.00	M1.80x0.35P	8.40	3.50	1.20	MGG 1003
AANHAF1004	2.80	10.00	M1.80x0.35P	9.40	4.50	1.20	MGG 1004
AANHAF1005	2.80	10.00	M1.80x0.35P	10.40	5.50	1.20	MGG 1005
AANHAF1006	2.80	10.00	M1.80x0.35P	11.40	6.50	1.20	MGG 1006
AANHAF1007	2.80	10.00	M1.80x0.35P	12.40	7.50	1.20	MGG 1007
AANHAF1008	2.80	10.00	M1.80x0.35P	13.40	8.50	1.20	MGG 1008
AANHAF1009	2.80	10.00	M1.80x0.35P	14.40	9.50	1.20	MGG 1009
Обработка поверхности - машинная							
Масса – не более 2,634 г.							

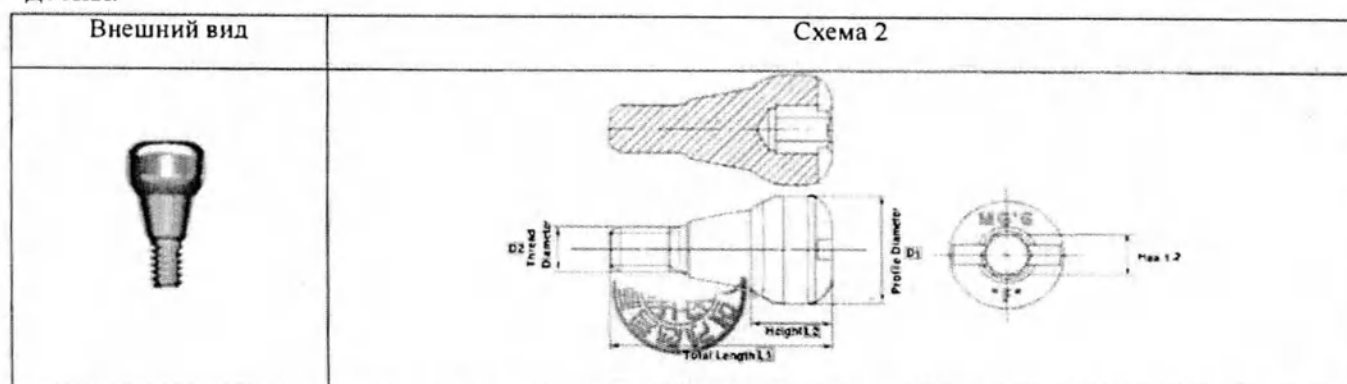- Формирователь десны (Healing Abutment) для имплантата MiNi фиксируется на имплантате MiNi и помогает сформировать необходимый контур мягких тканей (десны) в период заживления десны.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Hex (внутренний шестигранник) мм (-0.01/-0.02)	Лазерная маркировка
		D1 (диаметр интерфейса) (+0.02)	D2 (диаметр профиля) (-0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота головки) (±0.05)		
Формирователь десны (Healing Abutment)	MiNA3025	3.20	2.38	6.30	2.30	1.20	302
	MiNA3030	3.20	2.38	6.80	2.80	1.20	303
	MiNA3040	3.20	2.38	7.80	3.80	1.20	304
	MiNA3050	3.20	2.38	8.80	4.80	1.20	305
	MiNA3060	3.20	2.38	9.80	5.80	1.20	306
	MiNA3070	3.20	2.38	10.80	6.80	1.20	307
	MiNA3080	3.20	2.38	11.80	7.80	1.20	308
	MiNA3090	3.20	2.38	12.80	8.80	1.20	309
	MiNA3525	3.70	2.38	6.30	0.60	1.20	352
	MiNA3530	3.70	2.38	6.80	1.30	1.20	353
	MiNA3540	3.70	2.38	7.80	2.30	1.20	354
	MiNA3550	3.70	2.38	8.80	3.30	1.20	355
	MiNA3560	3.70	2.38	9.80	4.30	1.20	356
	MiNA3570	3.70	2.38	10.80	6.80	1.20	357
	MiNA3580	3.70	2.38	11.80	7.80	1.20	358
	MiNA3590	3.70	2.38	12.80	8.80	1.20	359
	Обработка поверхности - машинная						
	Масса – не более 0,336 г.						

2) Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)

Помогает сформировать необходимый контур мягких тканей (десны) в период заживления десны. Фиксируется в имплантате винтом S.H.A. Используется при цифровом протоколе, чтобы уменьшить инвазивность и время реабилитации пациента.

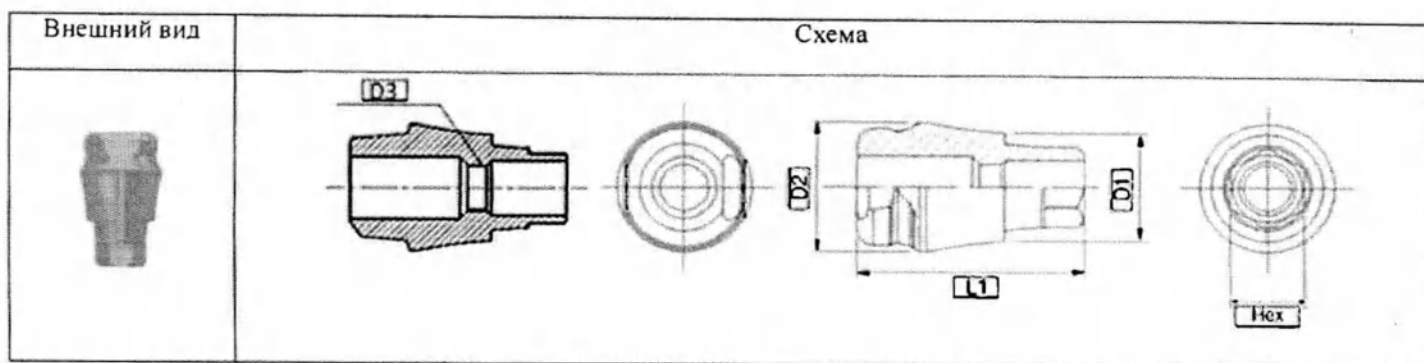Таблица 50.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Hex (внешний шестигранный) мм (±0.01/-0.02)	Цвет анодизации/Обработка поверхности
		D1 (диаметр интерфейса) (±0.02)	D2 (диаметр профиля) (±0.05)	D3 (диаметр внутренней резьбы) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)		
Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)	ARISH4004	3.50	4.20	M1.8 x 0.35P	6.90	2.30	Золотистый
	ARISH4005	3.50	4.20	M1.8 x 0.35P	7.90	2.30	Машинная
	ARISH4007	3.50	4.20	M1.8 x 0.35P	9.90	2.30	Зеленый
	ARISH5004	3.50	4.70	M1.8 x 0.35P	6.90	2.30	Золотистый
	ARISH5005	3.50	4.70	M1.8 x 0.35P	7.90	2.30	Машинная
	ARISH5007	3.50	4.70	M1.8 x 0.35P	9.90	2.30	Зеленый
	ARISH6004	3.50	5.70	M1.8 x 0.35P	6.90	2.30	Золотистый
	ARISH6005	3.50	5.70	M1.8 x 0.35P	7.90	2.30	Машинная
	ARISH6007	3.50	5.70	M1.8 x 0.35P	9.90	2.30	Зеленый
	ARISH7004	3.50	6.70	M1.8 x 0.35P	6.90	2.30	Золотистый
	ARISH7005	3.50	6.70	M1.8 x 0.35P	7.90	2.30	Машинная
	ARISH7007	3.50	6.70	M1.8 x 0.35P	9.90	2.30	Зеленый
В состав упаковки входит Винт S.H.A (S.H.A Screw) ARIHS1804, ARIHS1805, ARIHS1807							
Масса – не более 0,263 г.							

3) Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment)

Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment) помогает сформировать необходимый контур мягких тканей в период заживления десны после процедуры направленной регенерации кости вокруг имплантата. Фиксирует мембрану i-Gen на винте i-Gen.

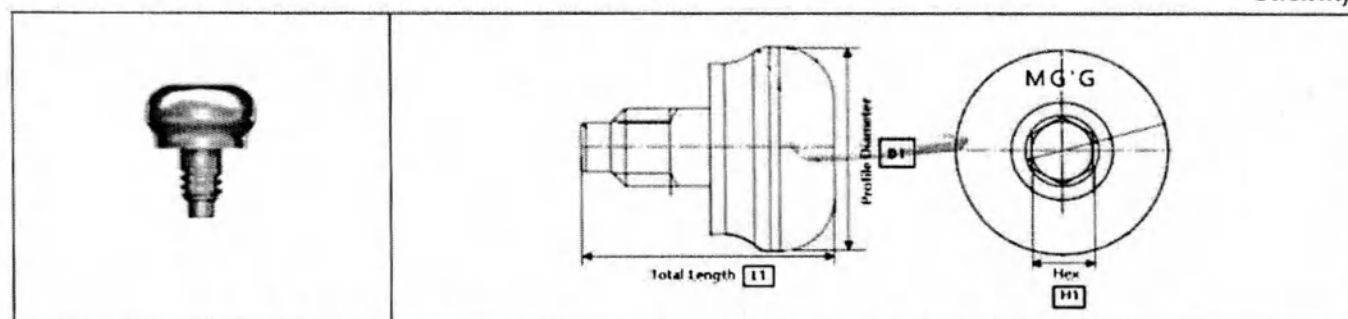Таблица 51.



Размеры:




Наименование	Модель	Размер, мм		Hex (внутренний шестигранник)(+0.02)
		D1 (диаметр профиля) (±0.04)	L1 (общая длина) (±0.05)	
Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment)	FHA402	4.20	5.10	1.20
	FHA403	4.20	6.10	1.20
	FHA404	4.20	7.10	1.20
	Обработка поверхности - машинная			
	Масса – не более 0,147 г			

9.5 Характеристики Титанового основания (ZrGen Abutment)

1) Титановое основание (ZrGen Abutment)

Устанавливается на имплантат и закрепляется винтом абатмента для дальнейшей фиксации безметалловой конструкции при цифровом протоколе с цементной или цементно-винтовой фиксацией. Либо устанавливается на абатмент Osta, закрепляясь винтом абатмента, либо устанавливается на абатмент Multi-unit и Multi-unit угловой, закрепляясь винтом цилиндра - для дальнейшей фиксации безметалловой конструкции при цифровом протоколе с цементной или цементно-винтовой фиксацией.

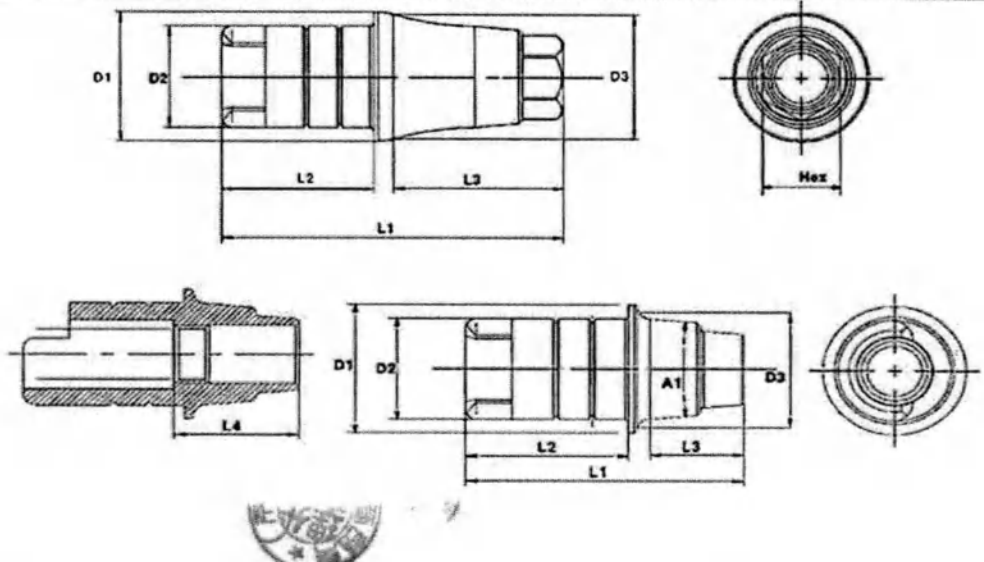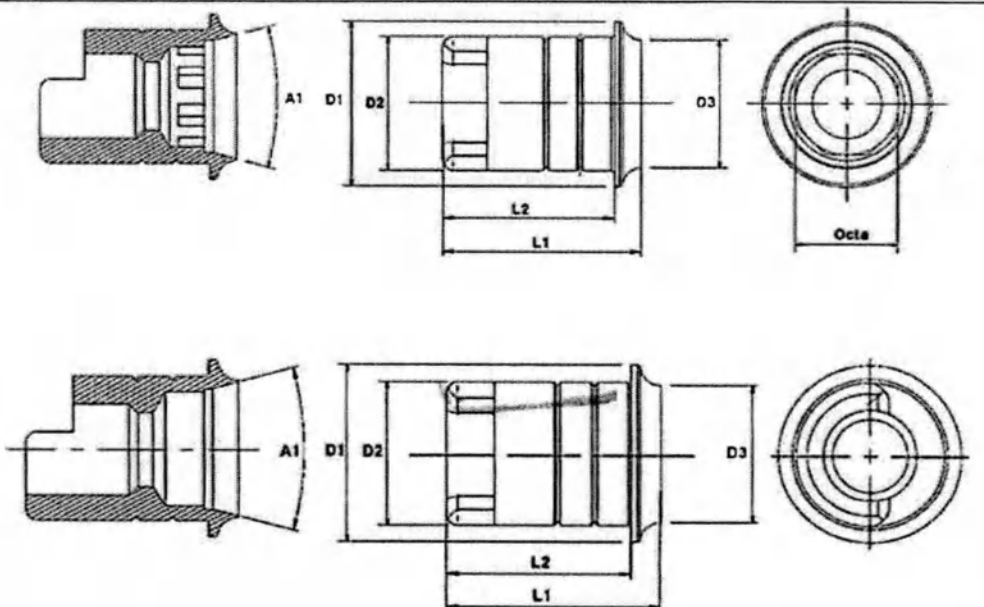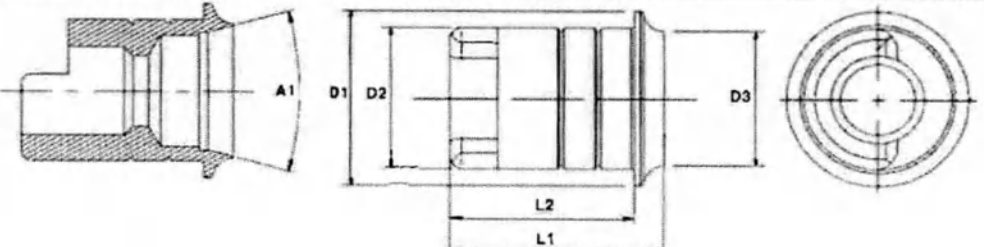Таблица 52.


Внешний вид	Схема 1
 AANIPR4015  AANIPR4015N	
 AOCEPS5015  ANOEPS5015	
 AMUAPR5515N	

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм						А1 (градус соединения) (±0.2)	Hex (внешний шестигранный) (±0.01)	Оста (внутренний осьмигранный) (±0.01)	Винт
		D1 (общий диаметр) (±0.02)	D2 (диаметр цилиндра) (- 0.02)	D3 (диаметр профиля) (-0.02)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота цилиндра) (- 0.05)	L3 (высота десны) (-0.05)				
Титановое основание (ZrGen Abutment)	В состав упаковки входит Винт Multi Post (Multi Post Screw) :										
	AANIPR4015	4.00	3.15	3.135	7.70	4.50	2.60	10	2.30	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4016	4.00	3.15	3.135	9.20	6.00	2.60	10	2.30	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4018	4.00	3.15	3.135	11.20	8.00	2.60	10	2.30	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4025	4.00	3.15	3.135	8.60	4.50	2.60	10	2.30	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4026	4.00	3.15	3.135	10.10	6.00	2.60	10	2.30	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4028	4.00	3.15	3.135	12.10	8.00	2.60	10	2.30	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4035	4.00	3.15	3.135	10.10	4.50	2.60	10	2.30	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4036	4.00	3.15	3.135	11.60	6.00	2.60	10	2.30	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4038	4.00	3.15	3.135	13.60	8.00	2.60	10	2.30	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4045	4.00	3.15	3.135	11.10	4.50	2.60	10	2.30	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4046	4.00	3.15	3.135	12.60	6.00	2.60	10	2.30	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4048	4.00	3.15	3.135	14.60	8.00	2.60	10	2.30	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4015N	4.00	3.15	3.135	7.70	4.50	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4016N	4.00	3.15	3.135	9.20	6.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4018N	4.00	3.15	3.135	11.20	8.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4025N	4.00	3.15	3.135	8.60	4.50	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4026N	4.00	3.15	3.135	10.10	6.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4028N	4.00	3.15	3.135	12.10	8.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4035N	4.00	3.15	3.135	10.10	4.50	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4036N	4.00	3.15	3.135	11.60	6.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4038N	4.00	3.15	3.135	13.60	8.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4045N	4.00	3.15	3.135	11.10	4.50	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4046N	4.00	3.15	3.135	12.60	6.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4048N	4.00	3.15	3.135	14.60	8.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4515	4.40	3.15	3.135	7.70	4.50	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4516	4.40	3.15	3.135	9.20	6.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4518	4.40	3.15	3.135	11.20	8.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4525	4.40	3.15	3.135	8.60	4.50	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4526	4.40	3.15	3.135	10.10	6.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4528	4.40	3.15	3.135	12.10	8.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4535	4.40	3.15	3.135	10.10	4.50	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4536	4.40	3.15	3.135	11.60	6.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4538	4.40	3.15	3.135	13.60	8.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
	AANIPR4545	4.40	3.15	3.135	11.10	4.50	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST

AANIPR4546	4.40	3.15	3.135	12.60	6.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
AANIPR4548	4.40	3.15	3.135	14.60	8.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
AANIPR4515N	4.40	3.15	3.135	7.70	4.50	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
AANIPR4516N	4.40	3.15	3.135	9.20	6.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
AANIPR4518N	4.40	3.15	3.135	11.20	8.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
AANIPR4525N	4.40	3.15	3.135	8.60	4.50	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
AANIPR4526N	4.40	3.15	3.135	10.10	6.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
AANIPR4528N	4.40	3.15	3.135	12.10	8.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
AANIPR4535N	4.40	3.15	3.135	10.10	4.50	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
AANIPR4536N	4.40	3.15	3.135	11.60	6.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
AANIPR4538N	4.40	3.15	3.135	13.60	8.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
AANIPR4545N	4.40	3.15	3.135	11.10	4.50	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
AANIPR4546N	4.40	3.15	3.135	12.60	6.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
AANIPR4548N	4.40	3.15	3.135	14.60	8.00	2.60	10	Н/Д	Н/Д	AANMSF AANMST
В состав упаковки входит Винт абатмента (Abutment Screw):										
AOCEPS5015	5.00	4.05	3.87	5.80	5.00	Н/Д	30	Н/Д	3.01	IRCS200
AOCEPS5016	5.00	4.05	3.87	6.80	6.00	Н/Д	30	Н/Д	3.01	IRCS200
AOCEPS5018	5.00	4.05	3.87	8.80	8.00	Н/Д	30	Н/Д	3.01	IRCS200
ANOEPS5015	5.00	4.05	3.87	5.80	5.00	Н/Д	30	Н/Д	3.01	IRCS200
ANOEPS5016	5.00	4.05	3.87	6.80	6.00	Н/Д	30	Н/Д	3.01	IRCS200
ANOEPS5018	5.00	4.05	3.87	8.80	8.00	Н/Д	30	Н/Д	3.01	IRCS200
AOCEPR5515	5.50	4.05	4.80	5.80	5.00	Н/Д	30	Н/Д	3.01	IRCS200
AOCEPR5516	5.50	4.05	4.80	6.80	6.00	Н/Д	30	Н/Д	3.01	IRCS200
AOCEPR5518	5.50	4.05	4.80	8.80	8.00	Н/Д	30	Н/Д	3.01	IRCS200
ANOEP5515	5.50	4.05	4.80	5.80	5.00	Н/Д	30	Н/Д	3.01	IRCS200
ANOEP5516	5.50	4.05	4.80	6.80	6.00	Н/Д	30	Н/Д	3.01	IRCS200
ANOEP5518	5.50	4.05	4.80	8.80	8.00	Н/Д	30	Н/Д	3.01	IRCS200
В состав упаковки входит Винт цилиндра (Cylinder Screw):										
AMUAPR5515N	5.50	4.25	4.80	5.80	5.00	Н/Д	40	Н/Д	Н/Д	MUAS
AMUAPR5516N	5.50	4.25	4.80	6.80	6.00	Н/Д	40	Н/Д	Н/Д	MUAS
AMUAPR5518N	5.50	4.25	4.80	8.80	8.00	Н/Д	40	Н/Д	Н/Д	MUAS
Обработка поверхности - машинная										
Масса – не более 0,586 г.										

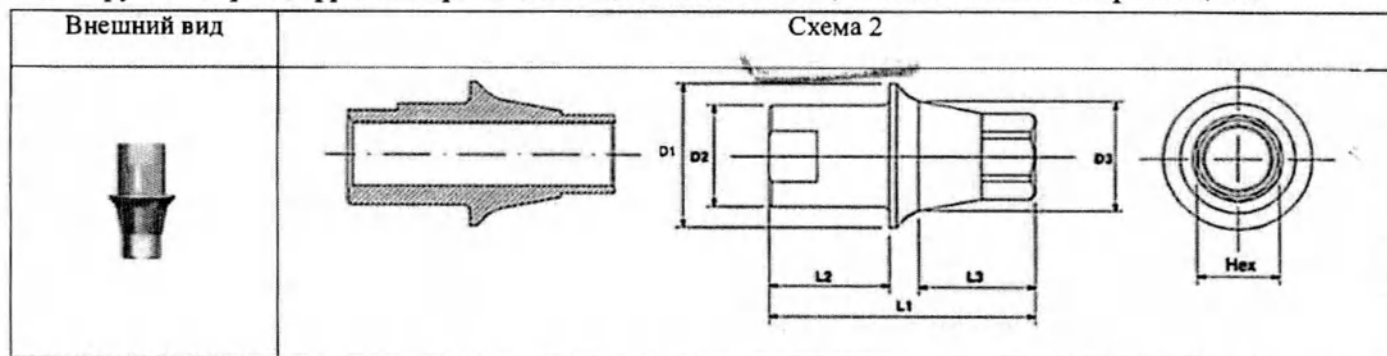- Титановое основание (ZrGen Abutment) моделей MIPN3013, MIPN3013N устанавливается на имплантат MiNi и закрепляется винтом абатмента для дальнейшей фиксации безметалловой конструкции при цифровом протоколе с цементной или цементно-винтовой фиксацией.



Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм						Hex (внешний шестигранник)
		D1 (общий диаметр) (-0.02)	D2 (диаметр ответной части)	D3 (диаметр интерфейса) (+0.02)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (длина ответной части) (±0.05)	L3 (длина соединения) (-0.05)	

			(-0.02)					
Титановое основание (ZrGen Abutment)	MIPN3013	3.10	2.20	2.38	5.50	2.50	2.40	1.70
	MIPN3013N	3.10	2.20	2.38	5.10	2.50	2.00	Н/Д
	Обработка поверхности - машинная							
	В состав упаковки входит Винт абатмента (Abutment Screw) MIAZ1410 – 13 шт.							
	Масса – не более 0,064г.							

2) Титановое основание Tun C (ZrGen Abutment C-Type)

Устанавливается на имплантат и закрепляется винтом абатмента для дальнейшей фиксации безметалловой конструкции при цифровом протоколе с цементной или цементно-винтовой фиксацией по технологии CEREC.

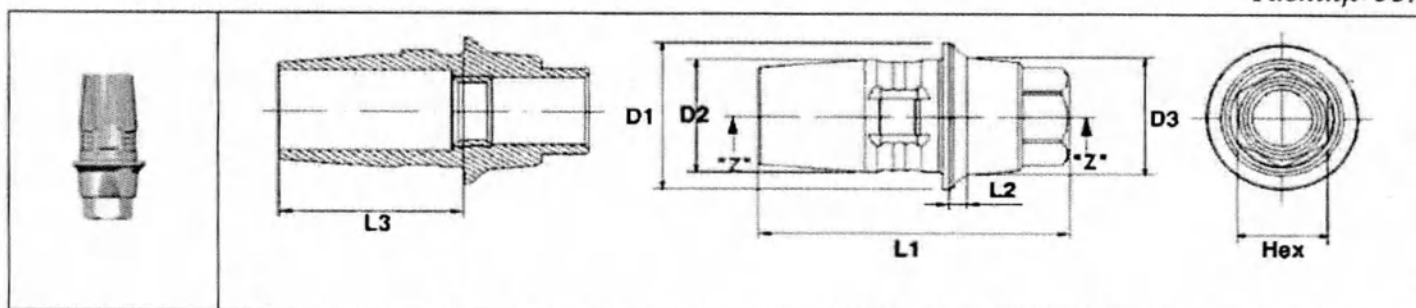Таблица 53.



Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм						Hex (внешний шестигранник) (±0.05)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр профиля) (±0.02)	D2 (диаметр верхнего цилиндра) (±0.05)	D3 (диаметр интерфейса) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота десны) (±0.05)	L3 (высота верхнего цилиндра) (±0.05)		
Титановое основание Тип C (ZrGen Abutment C-Type)	ARCS3405	3.90	3.00	3.135	7.90	0.45	4.70	2.30	Машинная
	ARCS3410	3.90	3.00	3.135	8.40	0.95	4.70	2.30	Машинная
	ARCS3420	3.90	3.00	3.135	9.40	1.95	4.70	2.30	Машинная
	ARCS3805	4.30	3.00	3.135	7.90	0.45	4.70	2.30	Машинная
	ARCS3810	4.30	3.00	3.135	8.40	0.95	4.70	2.30	Машинная
	ARCS3820	4.30	3.00	3.135	9.40	1.95	4.70	2.30	Машинная
	ARCL4505	5.50	3.40	3.135	7.90	0.45	4.70	2.30	Машинная
	ARCL4510	5.50	3.00	3.135	8.40	0.95	4.70	2.30	Машинная
	ARCL4520	5.50	3.00	3.135	9.40	1.95	4.70	2.30	Машинная
В состав упаковки входит Винт Multi Post (Multi Post Screw) AANMSF, AANMST – 13 шт.									
Масса – не более 0,586г.									

9.6 Характеристики Набора Meg-Ball для съемного протезирования (Meg-Ball Package)

Набор Meg-Ball (Meg-Ball Package), включает набор компонентов для съемного протезирования на абатменте Meg-Ball (шаровидном абатменте). Абатмент устанавливается на имплантате (их обычно несколько, чтобы всю челюсть покрыть). Далее на шарик абатмента устанавливается позиционер матрицы, который позволяет расположить оси матриц металлических в съемном протезе вертикально и параллельно друг другу, компенсируя углы наклона имплантатов, что обеспечивает более надежную фиксацию съемного протеза.

Таблица 54.


Внешний вид	Схема
 MBAR00	

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Hex (внешний шестигранный) (±0.01/-0.02)	Обработка поверхности
		D1 (диаметр головки) (-0.02)	D2 (диаметр профиля) (+0.02)	D3 (диаметр наружной резьбы) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)		
Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)	MBAR00	2.25	3.135	M1.8 x 0.35P	9.50	2.50	Машинная
	MBAR10	2.25	3.135	M1.8 x 0.35P	10.00	2.50	Машинная
	MBAR20	2.25	3.135	M1.8 x 0.35P	11.00	2.50	Машинная
	MBAR30	2.25	3.135	M1.8 x 0.35P	12.00	2.50	Машинная
	MBAR40	2.25	3.135	M1.8 x 0.35P	13.00	2.50	Машинная
	MBAR50	2.25	3.135	M1.8 x 0.35P	14.00	2.50	Машинная
	MBAR60	2.25	3.135	M1.8 x 0.35P	15.00	2.50	Машинная
Масса – не более 0,397 г.							

- Характеристики Металлической матрицы с ретенционным кольцом (Metal Housing) – указаны в таблице 45.

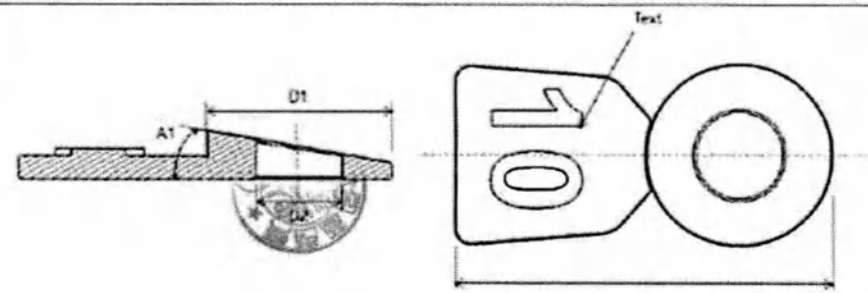- Позиционер матрицы (Housing Positioner) позволяет расположить оси матриц металлических в съемном протезе вертикально и параллельно друг другу, компенсируя углы наклона имплантатов, что обеспечивает более надежную фиксацию съемного протеза.

Внешний вид	Схема
 MBP15	

Размеры:







Наименование	Модель	Размер, мм			A1 (Угол) (±0.2)	Цвет маркировки
		D1 (диаметр головки) (±0.05)	D2 (диаметр отверстия) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)		
Позиционер матрицы (Housing Positioner)	MBP00	6.0	2.8	12.00	0	Белый
	MBP05	6.0	2.8	12.00	5	Желтый
	MBP10	6.0	2.8	12.00	10	Красный
	MBP15	6.0	2.8	12.00	15	Синий
Масса – не более 0,064 г.						

9.7 Характеристики Набора Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)

Набор для съемного протезирования Meg-Rhein (Meg-Rhein Overdenture System) включает Абатмент Meg-Rhein, Колпачок ретенционный, Трансфер слепочный пластиковый, Матрицу металлическую и Диск защитный. Набор используется для закрепления полного протеза челюсти на предустановленных имплантатах. На имплантаты устанавливается абатмент Meg-Rhein, Слепочный трансфер пластиковый фиксируется на абатменте для проекции положения абатмента на модели.

На абатмент устанавливается ретенционный колпачок, на который затем размещается матрица металлическая, предустановленная в съемный протез.

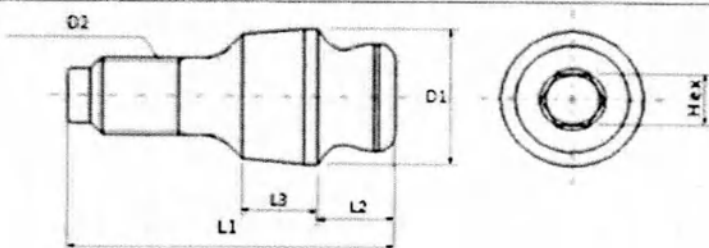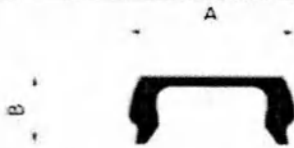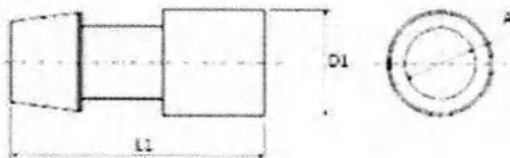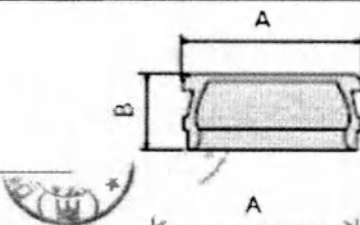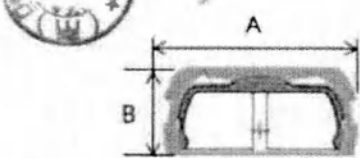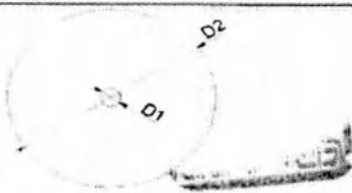Защитный диск предотвращает попадание цемента под десну при фиксации съемного протеза на абатментах.

Внешний вид	Схема 1
 Абатмент Meg-Rhein ADR00	
 RCWP Колпачок ретенционный	
 PIC Трансфер слепочный пластиковый	
 MHP Матрица металлическая	
 THP Матрица металлическая	
 PD1515 Диск защитный	

Размеры:

- Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment):

Наименование	Модель	Размер, мм					Hex (внутренний шестигранник) (±0.01/-0.02)	Обработка поверхнос ти
		D1 (диаметр профиля) (±0.05)	D2 (диаметр наружной резьбы) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота головки) (±0.05)	L3 (высота десны) (±0.05)		
Абатмент Meg- Rhein (Meg- Rhein Abutment)	ADR00	3.135	M1.8 x 0.35P	7.25	1.70	1.70	1.20	TiN
	ADR01	3.135	M1.8 x 0.35P	7.75	1.70	2.20	1.20	TiN
	ADR02	3.135	M1.8 x 0.35P	8.75	1.70	3.20	1.20	TiN
	ADR03	3.135	M1.8 x 0.35P	9.75	1.70	4.20	1.20	TiN
	ADR04	3.135	M1.8 x 0.35P	10.75	1.70	5.20	1.20	TiN
	ADR05	3.135	M1.8 x 0.35P	11.75	1.70	6.20	1.20	TiN
	ADR06	3.135	M1.8 x 0.35P	12.75	1.70	7.20	1.20	TiN
Масса – не более 0,323 г.								

- Колпачок ретенционный (Retentive Cap):

Наименование	Модель	Размер, мм		Цвет маркировки
		A (диаметр профиля) (+0.04)	B (общая высота) (± 0.05)	
Колпачок ретенционный (Retentive Cap)	RCWP	3.80	1.70	Н/Д
	RCVP	3.80	1.70	Фиолетовый
	RCPP	3.80	1.70	Розовый
	RCYP	3.80	1.70	Желтый
	RCBP	3.80	1.70	Черный
Масса – не более 0,064 г.				

- Трансфер слепочный пластиковый (Plastic Impression Coping):

Наименование	Модель	Размер, мм			Цвет маркировки
		D1 (диаметр профиля) (± 0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	A (диаметр соединения) (± 0.05)	
Трансфер слепочный пластиковый (Plastic Impression Coping)	PIC	3.7	9.0	2.48	Белый
Масса – не более 0,842г.					

- Матрица металлическая (Stainless Steel Housing):







Наименование	Модель	Размер, мм		Обработка поверхности / Цвет анодизации
		A (диаметр профиля) (+0.04)	B (общая высота) (± 0.05)	
Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)	MHP	4.50	2.00	Машинная
	THP	4.90	2.65	Желтый
Масса – не более 0,102 г.				

- Диск защитный (Protective Disk)

Наименование	Модель	Размер, мм		Цвет маркировки
		D1 (общий диаметр) (± 0.05)	D2 (диаметр отверстия) (± 0.05)	
Диск защитный (Protective Disk)	PD1515	15.00	1.50	Белый
Масса – не более 0.070 г.				

- Набор для съемного протезирования Meg-Rhein (Meg-Rhein Overdenture System) для имплантата MiNi включает Абатмент Meg-Rhein, Колпачок ретенционный, Трансфер слепочный пластиковый, Матрицу металлическую и Диск защитный. Набор используется для закрепления полного протеза челюсти на предустановленных имплантатах MiNi. На имплантаты устанавливается абатмент Meg-Rhein, Слепочный трансфер пластиковый фиксируется на абатменте для проекции положения абатмента на модели. На абатмент устанавливается ретенционный колпачок, на который затем размещается матрица металлическая, предустановленная в съемный протез. Защитный диск предотвращает попадание цемента под десну при фиксации съемного протеза на абатментах.

Внешний вид	Схема 2
-------------	---------

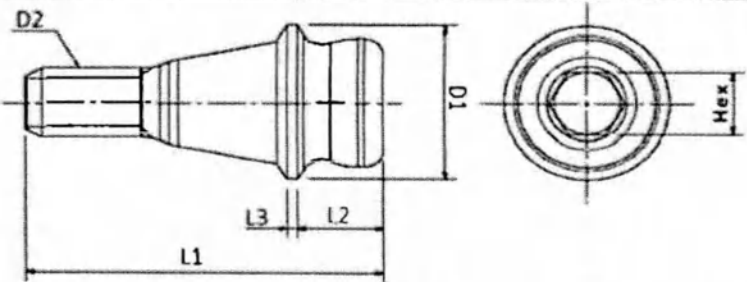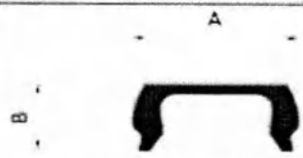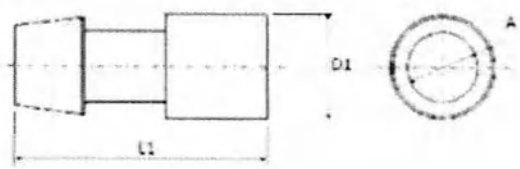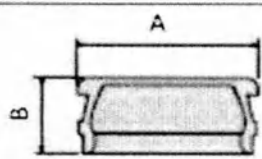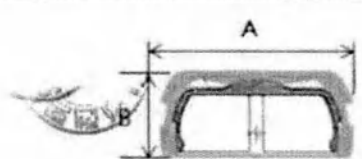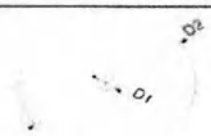 Абатмент Meg-Rhein MDR00	
 RCWP Колпачок ретенционный	
 PIC Трансфер слепочный пластиковый	
 MHP Матрица металлическая	
 THP Матрица металлическая	
 PD1515 Диск защитный	

Размеры:

- Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)

Наименование	Модель	Размер, мм					Hex (внутренний шестигранник) (±0.01/-0.02)	Обработка поверхнос- ти
		D1 (диаметр профиля) (±0.05)	D2 (диаметр внешней резьбы) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (высота головки) (±0.05)	L3 (высота десны) (±0.05)		
Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	MDR00	3.00	M1.4 x 0.3P	6.55	1.55	2.7	1.20	TiN
	MDR01	3.00	M1.4 x 0.3P	6.95	1.55	3.1	1.20	TiN
	MDR02	3.00	M1.4 x 0.3P	7.95	1.55	4.1	1.20	TiN
	MDR03	3.00	M1.4 x 0.3P	8.95	1.55	5.1	1.20	TiN
	MDR04	3.00	M1.4 x 0.3P	9.95	1.55	6.1	1.20	TiN
	MDR05	3.00	M1.4 x 0.3P	10.95	1.55	7.1	1.20	TiN
	MDR06	3.00	M1.4 x 0.3P	11.95	1.55	8.1	1.20	TiN
Масса – не более 0,224 г.								

- Колпачок ретенционный (Retentive Cap)

Наименование	Модель	Размер, мм		Цвет маркировки
		A (диаметр профиля) (+0.04)	B (общая высота) (±0.05)	

Колпачок ретенционный (Retentive Cap)	RCWP	3.80	1.70	Н/Д
	RCVP	3.80	1.70	Фиолетовый
	RCPP	3.80	1.70	Розовый
	RCYP	3.80	1.70	Желтый
	RCBP	3.80	1.70	Черный
Масса – не более 0,842 г.				

- Трансфер слепочный пластиковый (Plastic Impression Coping)

Наименование	Модель	Размер, мм			Цвет маркировки
		D1 (диаметр профиля) (± 0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	A (диаметр соединения) (± 0.05)	
Трансфер слепочный пластиковый (Plastic Impression Coping)	PIC	3.7	9.0	2.48	Белый
Масса – не более 0,842 г.					

- Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)

Наименование	Модель	Размер, мм		Обработка поверхности / Цвет анодизации
		A (диаметр профиля) ($+0.04$)	B (общая высота) (± 0.05)	
Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)	MHP	4.50	2.00	Машинная
	THP	4.90	2.65	Желтый
Масса – не более 0,102 г.				

- Диск защитный (Protective Disk)

Наименование	Модель	Размер, мм		Цвет маркировки
		D1 (общий диаметр)	D2 (диаметр отверстия)	
Диск защитный (Protective Disk)	PD1515	15.00	1.50	Белый
Масса – не более 0.070 г.				


9.8 Инструменты стоматологические (Dental Instruments):


При установке имплантатов производства компании MegaGen Implant Co., Ltd. рекомендуется использовать только оригинальные инструменты, производимые этой же компанией.

1) Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)

Используется для переноса абатмента Multi-unit, абатмента Multi-unit углового и абатмента примерочного на имплантат. С абатментом Multi-unit угловым и абатментом примерочным используется инструмент из титана, с абатментом Multi-unit – инструмент из пластика POM.

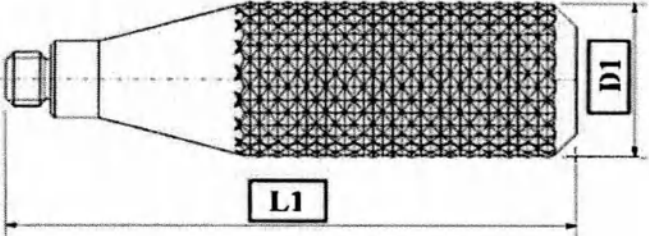Таблица 56.

Внешний вид	Схема
 MUAAC	

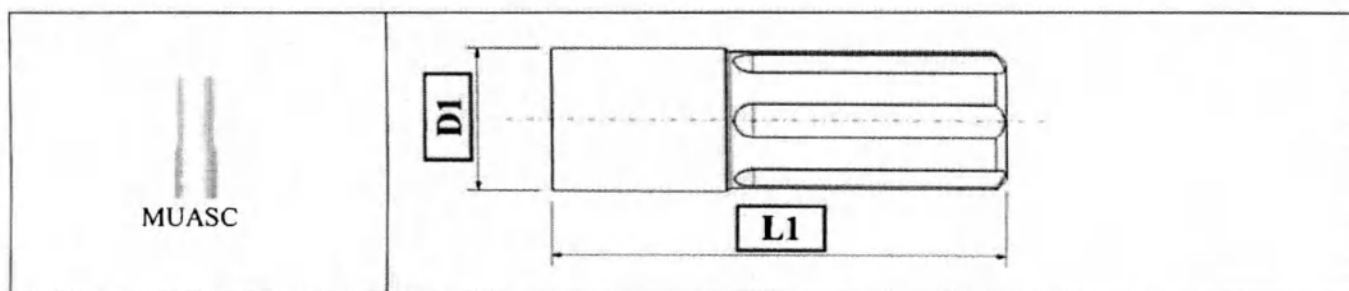


Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм		Обработка поверхности/ Цвет маркировки
		D1 (диаметр интерфейса) (-0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	
Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)	MUAAC	4.00	14.00	Машинная
	MUASC	4.2	13.00	Белый
	Масса – не более 1.253 г.			

2) Отвертка Multi-unit (Multi-unit Driver)

Используется для передачи крутящего момента для соединения абатмента Multi-unit и имплантата.

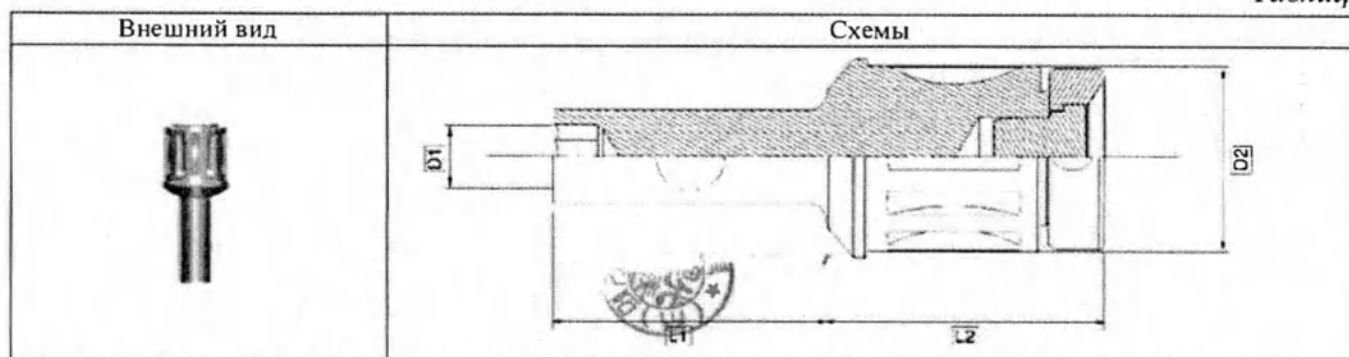Таблица 57.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Обработка поверхности	Цвет анодизации
		D1 (диаметр интерфейса) (+0.02/0)	D2 (общий диаметр) (± 0.05)	L1 (длина рабочей части) (± 0.05)	L2 (длина ручки) (± 0.05)		
Отвертка Multi-unit (Multi-unit Driver)	MUD10	2.05	7.50	10.00	10.00	Машинная	Синий
	TCMMUDS20	2.02	7.50	10.00	10.00	Машинная	Н/Д
	TCMMUDL20	2.02	7.50	15.00	10.00	Машинная	Н/Д
	Масса – не более 3.921 г.						

3) Отвертка для извлечения Multi-unit (Multi-unit Removal Driver)

Используется для удаления абатмента Multi-unit углового, когда абатмент невозможно удалить из-за эффекта холодной сварки, путем удаления винта абатмента.

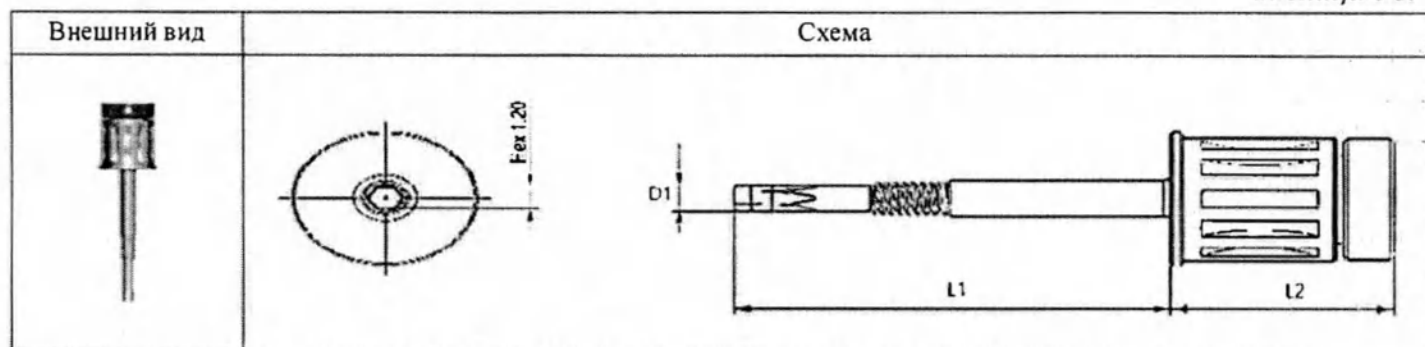Таблица 58.





Размер:

Наименование	Модель	Размер, мм				Обработка поверхности	Цвет анодизации
		D1 (диаметр интерфейса) (+0.02/0)	D2 (общий диаметр) (± 0.05)	L1 (длина рабочей части) (± 0.05)	L2 (длина ручки) (± 0.05)		
Отвертка для извлечения Multi-unit (Multi-unit Removal Driver)	MUARD20	1.20	M2.0X0.4P	20.00	9.00	Машинная	Синий
	Масса – не более 2.921г.						

4) Отвертка ручная (Hand Driver)

Используется для передачи крутящего момента на винты, которые используются для соединения абатмента и имплантата. Часть диаметра соединения «D2» имеет форму внешнего паза или наружную или внутреннюю шестигранную форму, и пользователь имеет возможность выбора части длины корпуса «L2» в зависимости от места соединения.

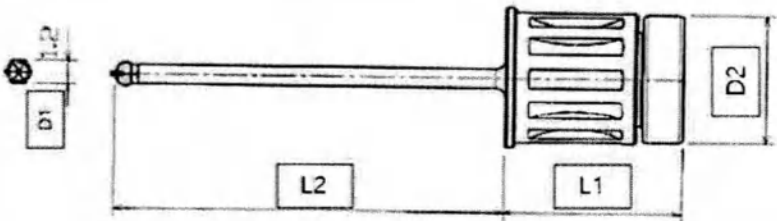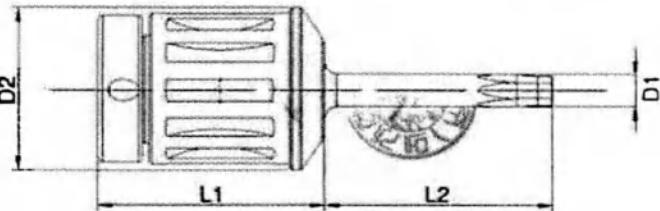Таблица 59.

Внешний вид	Схема
 MUHD1220	
 TCMHDS1600	

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм				Обработка поверхности	Цвет анодизации
		D1 (диаметр интерфейса) (+0.01/0)	D2 (общий диаметр) (± 0.05)	L1 (длина ручки) (± 0.05)	L2 (длина рабочей части) (± 0.05)		
Отвертка ручная (Hand Driver)	MUHD1220	1.20	6.80	9.00	20.00	Машинная	Синий
	TCMHDS1600	1.90	7.50	10.00	10.00	Машинная	Н/Д
	TCMHDU1200	1.50	7.50	10.00	5.00	Машинная	Синий
	TCMHDS1200	1.50	7.50	10.00	10.00	Машинная	Синий
	TCMHDL1200	1.50	7.50	10.00	15.00	Машинная	Синий
	TCMHDE1200	1.50	7.50	10.00	20.00	Машинная	Синий
Масса – не более 2.515 г.							

5) Отвертка машинная Multi-unit (Right Angle Driver Multi-unit)

Используется для передачи крутящего момента для соединения абатмента Multi-unit и имплантата. Используется только со стоматологическим наконечником.

Таблица 60.

Внешний вид	Схема
-------------	-------

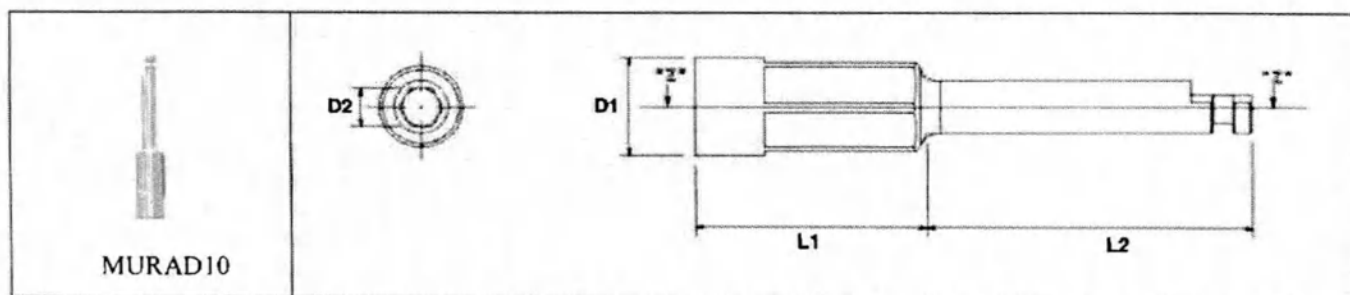

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Обработка поверхности
		D1 (общий диаметр) (0/-0.05)	D2 (диаметр шестигранника) (+0.03/0)	L1 (длина рабочей части) (± 0.05)	L2 (длина хвостовика) (± 0.05)	
Отвертка машинная Multi-unit (Right Angle Driver Multi-unit)	MURAD10	4.40	2.02	10.00	14.00	Машинная
	Масса – не более 1.39г.					

6) Отвертка для слепочного трансфера (Impression Driver)

Используется для передачи крутящего момента на навигационный пин, который используется для фиксации слепочного трансфера в имплантате.

Таблица 61.

Внешний вид	Схема
TCMID	
TCMIDE	

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм			Обработка поверхности
		D1 (общий диаметр) (± 0.01)	D2 (диаметр интерфейса) (± 0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	
Отвертка для слепочного трансфера (Impression Driver)	TCMID	5.50	5.50	10.50	Машинная
	TCMIDE	3.30	4.20	14.00	Машинная
Масса – не более 1,550 г.					

7) Отвертка для извлечения абатмента (Abutment Removal Driver)

Используется для извлечения абатмента с помощью внутренней резьбы в случаях, когда абатмент не может быть легко извлечен после холодной сварки путем извлечения винта абатмента после вживления имплантата.

Таблица 62.

Внешний вид	Схема
-------------	-------

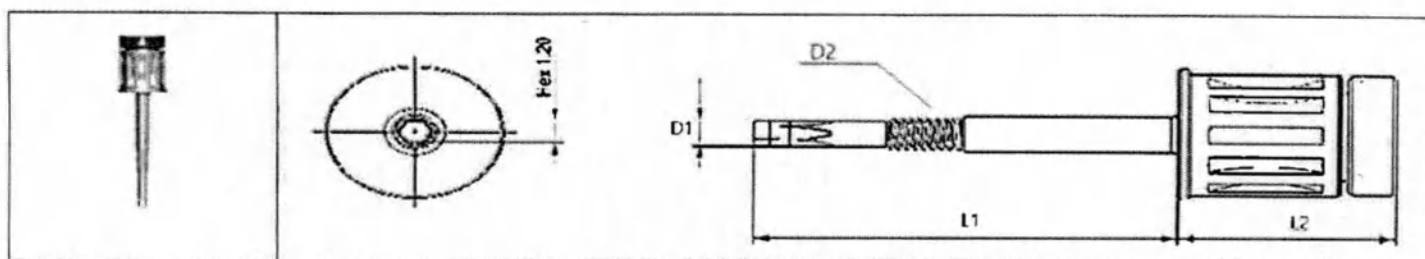


Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Hex (внешний шестигранник) (± 0.05)	Обработка поверхности	Цвет анодизации
		D1 (диаметр интерфейса) (0/-0.2)	L1 (длина рабочей части) (± 0.05)	L2 (длина ручки) (± 0.05)	D2 (диаметр внешней резьбы) (0/-0.2)			
Отвертка для извлечения абатмента (Abutment Removal Driver)	TANMRD18	1.48	17.50	9.00	M1,8x0,35P	1.20	Машинная	Синий
	TANMRD25	1.48	25.00	9.00	M1,8x0,35P	1.20	Машинная	Синий
	Масса – не более 2.353 г.							

8) Отвертка Octa (Octa Driver)

Используется для фиксации абатмента Octa в имплантате. В месте соединения с абатментом имеет внутренний восьмигранник.

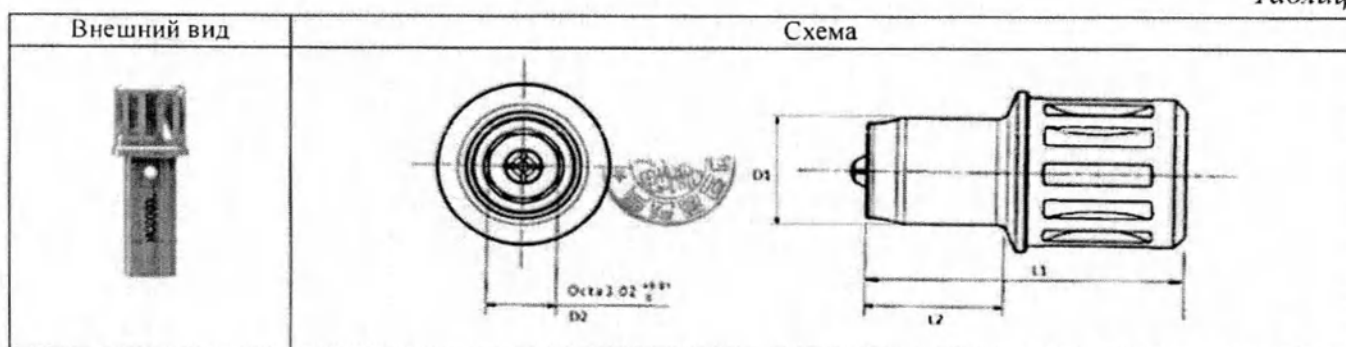Таблица 63.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Обработка поверхности
		D1 (диаметр рабочей части) (0/-0.05)	D2 (диаметр восьмигранника соединения) (+0.01/0)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (длина рабочей части) (± 0.05)	
Отвертка Octa (Octa Driver)	MOD300S	5.00	3.02	14.00	6.00	Машинная
	MOD300L	5.00	3.02	20.00	12.00	Машинная
	Масса – не более 3.834г.					

9) Отвертка для углового наконечника (Right Angle Driver)

Используется для передачи крутящего момента, исходящего от наконечника, к винтам, которые используются для фиксации абатментов в имплантате.

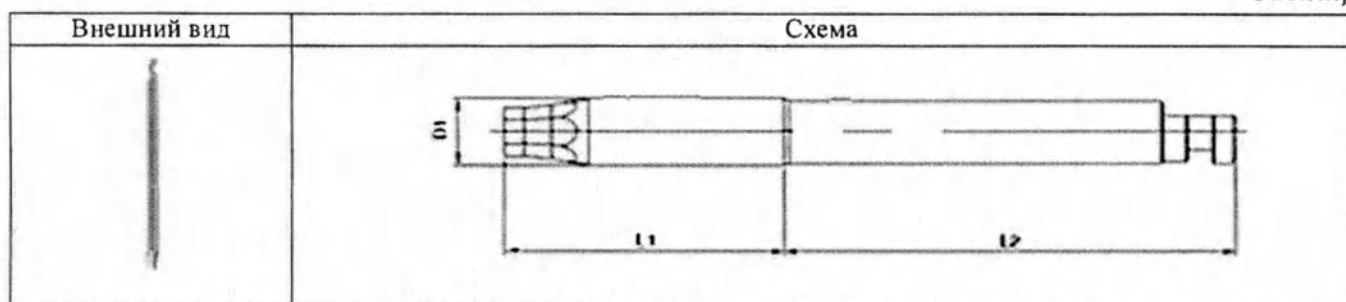Таблица 64.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Обработка поверхности
		D1 (диаметр интерфейса) (+0.05/0)	L1 (длина рабочей части) (± 0.05)	L2 (длина хвостовика) (± 0.05)	
Отвертка для углового наконечника (Right Angle Driver)	MDR120SS	1.50	3.75	14.25	Машинная
	MDR120S	1.50	10.00	16.00	Машинная
	MDR120L	1.50	15.00	16.00	Машинная
	MDR120EL	1.50	20.00	16.00	Машинная
Масса – не более 0.852 г.					

10) Отвертка установочная (Insert Driver)

Используется для передачи крутящего момента, создаваемого храповым или динамометрическим ключом с четырёхгранным переходником для фиксации компонентов, имеющих внутренний шестиграннык в головной части, в имплантате.

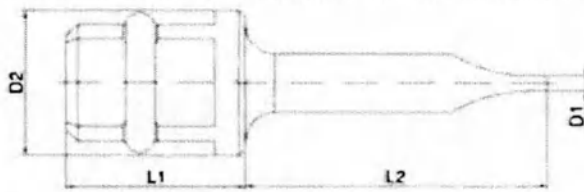Таблица 65.

Внешний вид	Схема
	



Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Обработка поверхности
		D1 (диаметр интерфейса) (+0.05/0)	D2 (диаметр шестигранника хвостовика) (± 0.05)	L1 (длина хвостовика) (± 0.05)	L2 (длина рабочей части) (± 0.05)	
Отвертка установочная (Insert Driver)	MID120S	1.50	5.00	7.00	10.00	Машинная
	MID120L	1.50	5.00	7.00	15.00	Машинная
Масса – не более 1 г.						

11) Отвертка для установки ретенционного колпачка (Retentive Cap Insertion Tool)

Используется для установки ретенционного колпачка на абатмент Meg-Rhein.

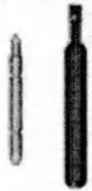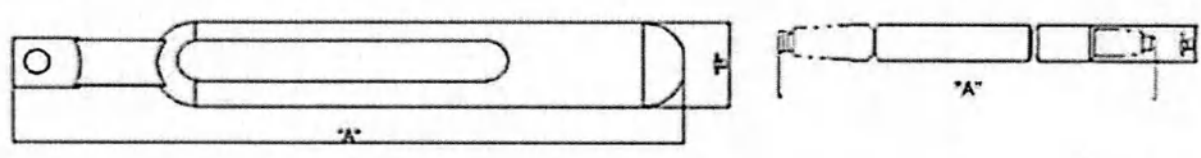Таблица 66.

Внешний вид	Схема
	




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм		Обработка поверхности / Цвет маркировки
		A (общая длина) (±0.05)	B (общий диаметр) (±0.05)	
Отвертка для установки ретенционного колпачка (Retentive Cap Insertion Tool)	085IAC	83	10.7	Синий
		40	4	Машинная
	Масса – не более 10г.			

12) Сверло копьевидное (Lance Drill)

Используется для обозначения разметки на кости в месте будущего ложа под имплантат, для дальнейшего точного сверления имплантологического ложа. Подходящая скорость вращения составляет около 1200 об./мин.

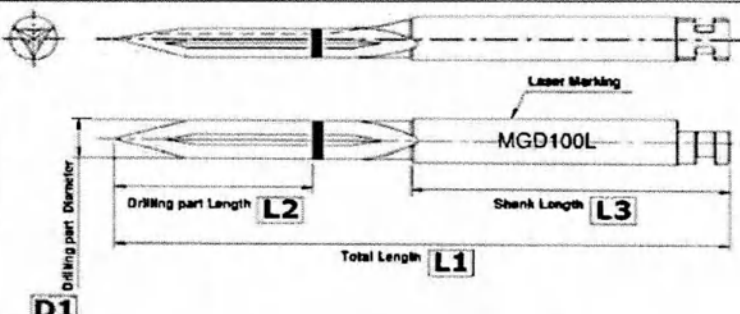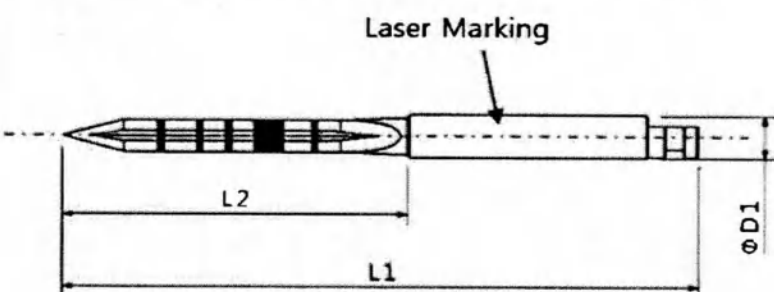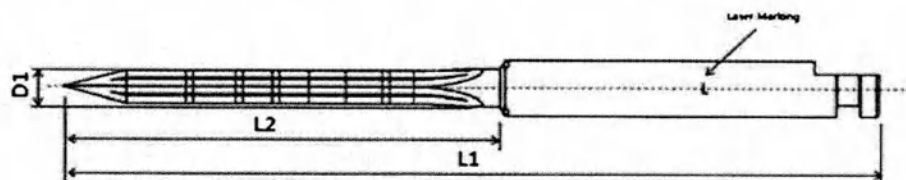Таблица 67.

Внешний вид	Схема
	
	
	

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм				Лазерная маркировка	Обработка поверхности
		D1 (диаметр рабочей части) (-0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (длина рабочей части) (± 0.05)	L3 (длина хвостовика) (± 0.05)		
Сверло копьевидное (Lance Drill)	MGD100L	2.00	31.00	10.00	16.00	MGD100L	Машинная
	LD1618S	1.60	33.00	18.00	Н/Д	1618S	Машинная
	LD1618M	1.60	38.00	18.00	Н/Д	1618M	Машинная
	LD1618L	1.60	43.00	18.00	Н/Д	1618L	Машинная
	LD2015	2.35	33.00	18.00	Н/Д	LD2015	Машинная
	LD2025	2.35	43.00	18.00	Н/Д	LD2025	Машинная
	LD2030	2.35	48.00	18.00	Н/Д	LD2030	Машинная
Масса – не более 0.973 г.							

13) Фреза маркировочная (Marking Drill)

Используется для осуществления промежуточной или финишной обработки при формировании имплантологического ложа под установку имплантата, имеющая на рабочей части контрастные отметки, позволяющие контролировать глубину погружения, соответствующую длине устанавливаемого имплантата. Скорость вращения зависит от плотности кости и устанавливается на уровне от 1200 до 1500 об/мин.

Таблица 68.

Внешний вид	Схема
-------------	-------

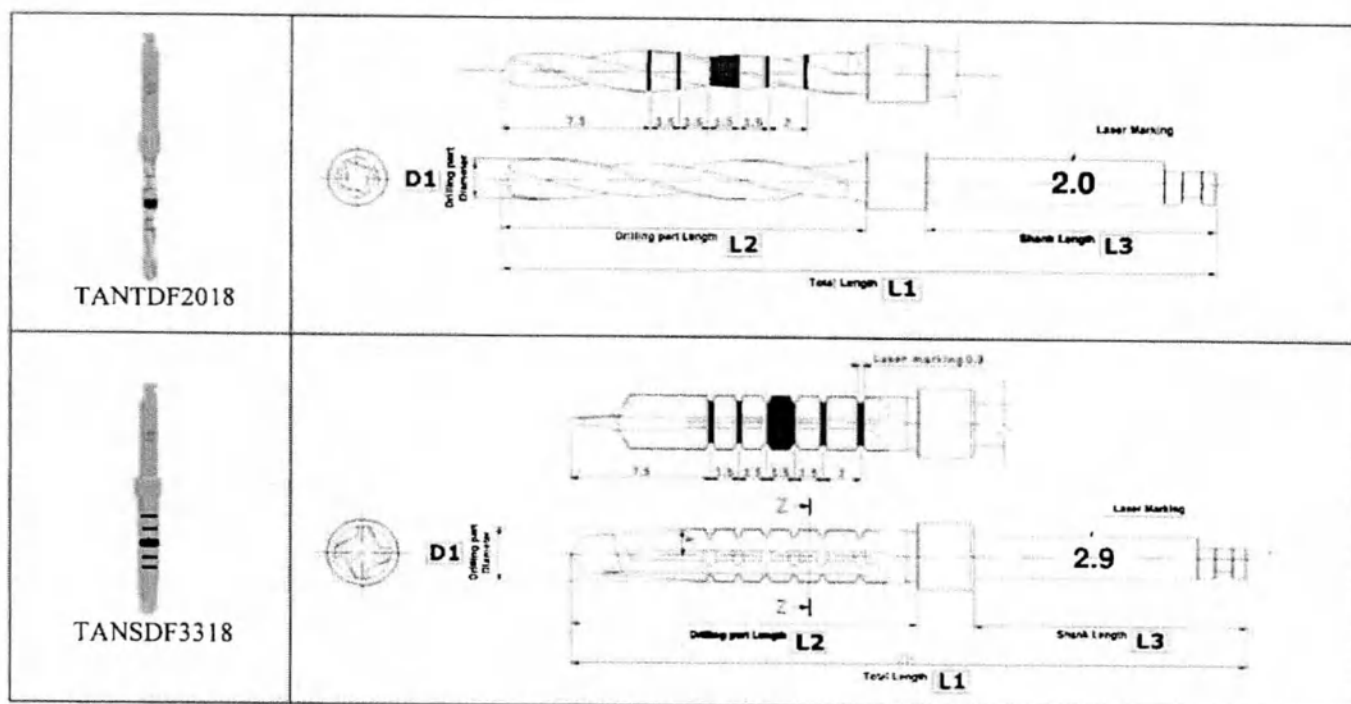

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Лазерная маркировка	Обработка поверхности и
		D1 (диаметр рабочей части) (-0.02)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (длина рабочей части) (± 0.05)	L3 (длина хвостовика) (± 0.05)		
Фреза маркировочная (Marking Drill)	TANTDF2018	2.10	36.00	18.50	14.50	2.0	TiN
	TANSDF3318	3.40	36.00	18.50	14.50	3.3	TiN
	TANSDF3818	3.90	36.00	18.50	14.50	3.8	TiN
	TANSDF4318	4.40	36.00	18.50	14.50	4.3	TiN
	TANSDF4815	4.90	33.00	15.50	14.50	4.8	TiN
	TANSDF5415	5.50	33.00	15.50	14.50	5.4	TiN
	TANSDF5915	6.00	33.00	15.50	14.50	5.9	TiN
Масса – не более 2.988 г.							

14) Фреза формирующая (Shaping Drill)

Используется для формирования имплантологического ложа под установку имплантата, имеющая на рабочей части контрастные отметки, позволяющие контролировать глубину погружения, соответствующую длине устанавливаемого имплантата, а направляющая часть - лазерную маркировку для указания диаметра сверления. Цилиндрическая направляющая часть «L3» предназначена для соединения с наконечником в соответствии с ISO 1797-1:2017. Соответствующая скорость вращения составляет около 800 - 1000 об/мин. TiN-покрытие: повышенная устойчивость к коррозии и истиранию.

Таблица 69.

Внешний вид	Схема

Размеры:




Наименование	Модель	Размер, мм				Лазерная маркировка	Обработка поверхность
		D1 (диаметр рабочей части) (-0.02)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (длина рабочей части) (± 0.05)	L3 (длина хвостовика) (± 0.05)		

Фреза формирующая (Shaping Drill)	SD2518S	2.50	33.69	18.69	15.00	2518S	TiN
	SD2518M	2.50	38.69	18.69	20.00	2518M	TiN
	SD2518L	2.50	43.69	18.69	25.00	2518L	TiN
	SD2818S	2.80	33.78	18.78	15.00	2818S	TiN
	SD2818M	2.80	38.79	18.78	20.00	2818M	TiN
	SD2818L	2.80	43.79	18.78	25.00	2818L	TiN
Масса – не более 0.956 г.							

15) Фреза со стоппером (Stopper Drill)

Фреза со стоппером имеет три канавки, используется для сверления отверстия соответствующего диаметра и глубины для вставки имплантата в кость. Канавка режущей части представлены в различных диаметрах в зависимости от диаметра имплантата. Для определения глубины сверления фреза имеет лазерную маркировку. Цилиндрическая направляющая часть предназначена для соединения с наконечником в соответствии с ISO1797-1:2011. Соответствующая скорость вращения зависит от плотности кости и устанавливается на уровне от 1200 до 1500 об/мин. TiN-покрытие: повышенная устойчивость к коррозии и истиранию.

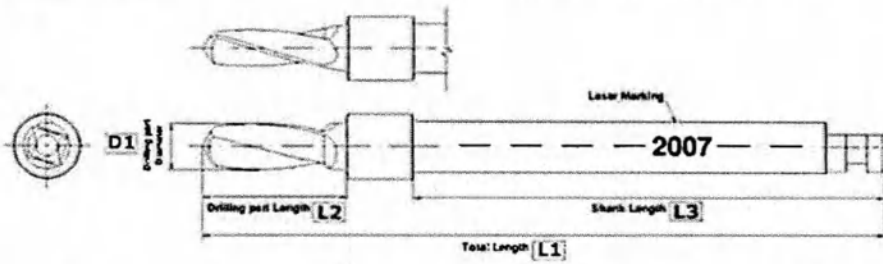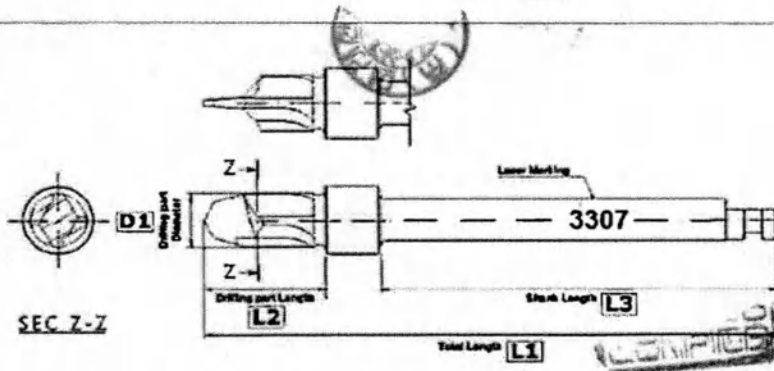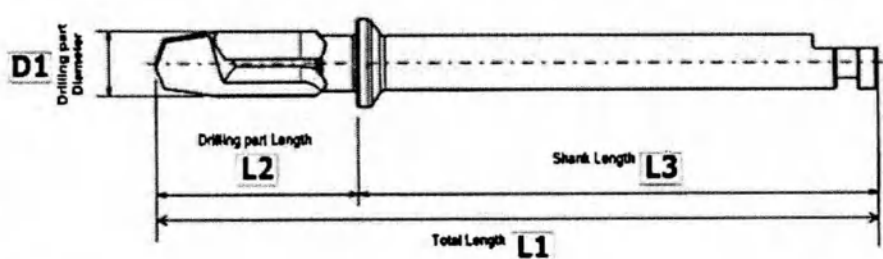Таблица 70.

Внешний вид	Схема
 TANTDF2007	
 TANSDF3307	
 SD2807M	

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм				Лазерная маркировка	Обработка поверхности
		D1 (диаметр рабочей части) (-0.02)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (длина рабочей части) (± 0.05)	L3 (длина хвостовика) (± 0.05)		
Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANTDF2007	2.10	31.50	7.50	21.00	2007	TiN
	TANTDF2008	2.10	33.00	9.00	21.00	2008	TiN
	TANTDF2010	2.10	34.50	10.50	21.00	2010	TiN
	TANTDF2011	2.10	36.00	12.00	21.00	2011	TiN

	SD2807M	2.80	28.78	7.78	20.00	2807M	TiN
	SD2808M	2.80	30.28	9.28	20.00	2808M	TiN
	SD2810M	2.80	31.78	10.78	20.00	2810M	TiN
	SD2811M	2.80	33.28	12.28	20.00	2811M	TiN
	TANSDF3307	3.40	31.50	7.50	21.00	3307	TiN
	TANSDF3308	3.40	33.00	9.00	21.00	3308	TiN
	TANSDF3310	3.40	34.50	10.50	21.00	3310	TiN
	TANSDF3311	3.40	36.00	12.00	21.00	3311	TiN
	TANSDF3807	3.40	31.70	7.70	21.00	3807	TiN
	TANSDF3808	3.40	33.20	9.20	21.00	3808	TiN
	TANSDF3810	3.40	34.70	10.70	21.00	3810	TiN
	TANSDF3811	3.40	36.20	12.20	21.00	3811	TiN
	TANSDF4307	3.40	31.80	7.80	21.00	4307	TiN
	TANSDF4308	3.40	33.30	9.30	21.00	4308	TiN
	TANSDF4310	3.40	34.80	10.80	21.00	4310	TiN
	TANSDF4311	3.40	36.30	12.30	21.00	4311	TiN
	TANSDF4807	4.90	31.50	7.50	21.00	4807	TiN
	TANSDF4808	4.90	33.00	9.00	21.00	4808	TiN
	TANSDF4810	4.90	34.50	10.50	21.00	4810	TiN
	TANSDF4811	4.90	36.00	12.00	21.00	4811	TiN
Масса – не более 2,886 г.							

16) Трепан с центральным пином (Point Trephine Bur)

Используется для обозначения точного места остеотомии без смещения. Его можно использовать при 40 об/мин без орошения солевым раствором. На хвостовике имеется лазерная маркировка, указывающая глубину и диаметр сверления.

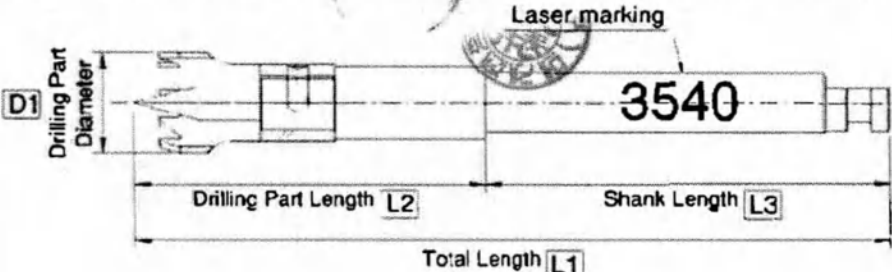Таблица 71.

Внешний вид	Схема
	

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм				Лазерная маркировка	Обработка Поверхности
		D1 (диаметр рабочей части) (-0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (длина рабочей части) (± 0.05)	L3 (длина хвостовика) (± 0.05)		
Трепан с центральным пином (Point Trephine Bur)	SPTB4050	5.00	30.00	14.00	16.00	4050	Машинная
Масса – не более 1,306 г							

17) Фреза кортикальная (Cortical Bone Drill)

Используется для формирования имплантологического ложа под установку имплантата в особо твердой кости. Диаметр режущей части - это фактический размер вставляемого имплантата, представлена в трех размерах в зависимости от диаметра имплантата. Цилиндрическая направляющая часть предназначена для соединения с наконечником в соответствии с ISO1797-1:2011. Соответствующая скорость вращения зависит от плотности кости и устанавливается на уровне от 500 до 800 об/мин.

Таблица 72.

Внешний вид	Схема
-------------	-------

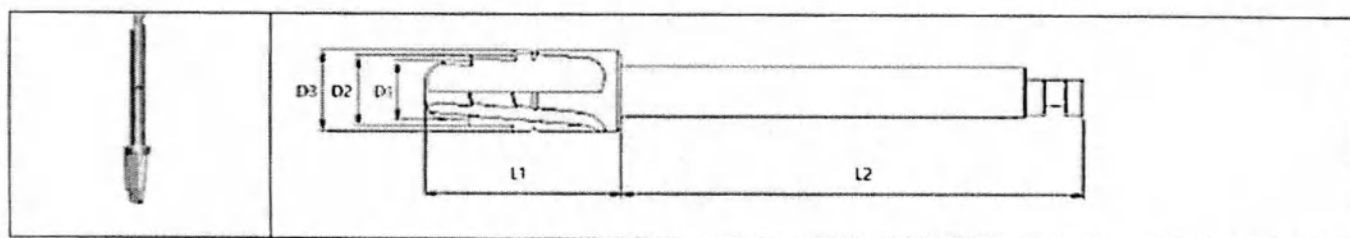

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм					Лазерная маркировка	Обработка поверхности
		D1 (диаметр первого ножа) (-0.05)	D2 (диаметр второго ножа) (-0.05)	D3 (общий диаметр) (-0.05)	L1 (длина рабочей части) (± 0.05)	L2 (длина хвостовика) (± 0.05)		
Фреза кортикальная (Cortical Bone Drill)	TANCDL3500	2.80	3.30	3.80	9.00	21.00	4	Машинная
	TANCDL4055	3.00	4.10	4.40	9.00	21.00	5	Машинная
	TANCDL6080	4.50	5.70	6.00	9.00	21.00	6	Машинная
Масса – не более 2,125 г.								

18) Бур трепанационный (Trephine Bur)

Используется для препарирования имплантационного ложа для установки имплантата, а также для забора аутогенной кости для последующей процедуры вертикальной аугментации.

Соответствующая скорость вращения зависит от плотности кости и устанавливается на уровне от 800 до 1000 об/мин.

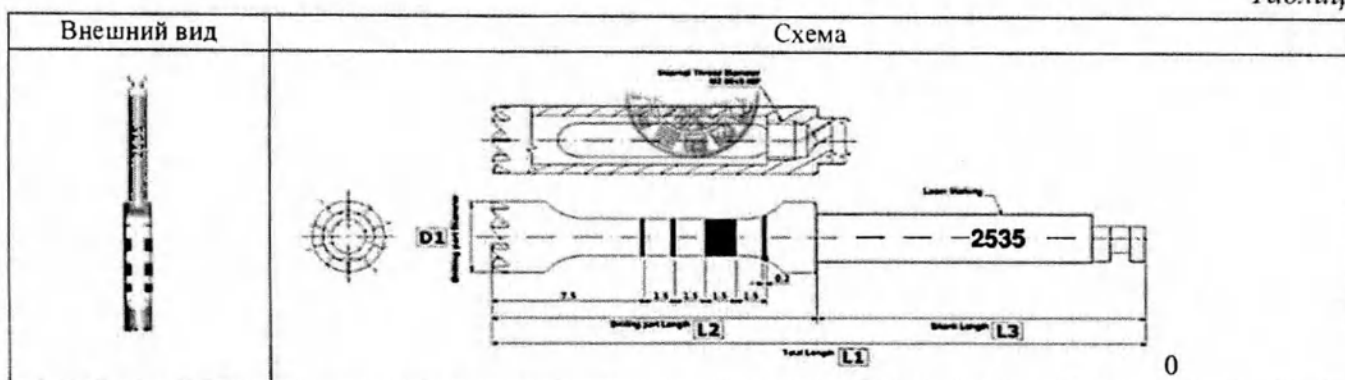Таблица 73.



Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм				Лазерная маркировка	Обработка поверхности
		D1 (диаметр рабочей части) (-0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (длина рабочей части) (± 0.05)	L3 (длина хвостовика) (± 0.05)		
Бур трепанационный (Trephine Bur)	TANTBL2535	3.50	32.00	16.00	16.00	2535	Машинная
	TANTBL4050	5.00	32.00	16.00	16.00	4050	Машинная
	TANTBL5060	6.00	32.00	16.00	16.00	5060	Машинная
	TANTBL6070	7.00	32.00	16.00	16.00	6070	Машинная
	TANTBE2535	3.50	38.00	16.00	22.00	2535E	Машинная
	TANTBE4050	5.00	38.00	16.00	22.00	4050E	Машинная
	TANTBE5060	6.00	38.00	16.00	22.00	5060E	Машинная
	TANTBE6070	7.00	38.00	16.00	22.00	6070E	Машинная
Масса – не более 1.503 г.							

19) Профилировщик кости (Bone Profiler)

Используется для удаления нависающего края кости для создания свободного доступа ортопедических компонентов в имплантат. Также применяется для удаления остатков кости вокруг винта-заглушки в случаях нарастания кости в процессе остеоинтеграции. На конце режущей части профиля имеются канавки для удаления костной ткани, канавка находится на

режущей части, чтобы врач мог выбрать высоту формирователя десны. Цилиндрическая направляющая часть предназначена для соединения с наконечником в соответствии с ISO1797-1:2011. Соответствующая скорость вращения зависит от плотности кости и устанавливается на уровне от 500 до 800 об/мин.

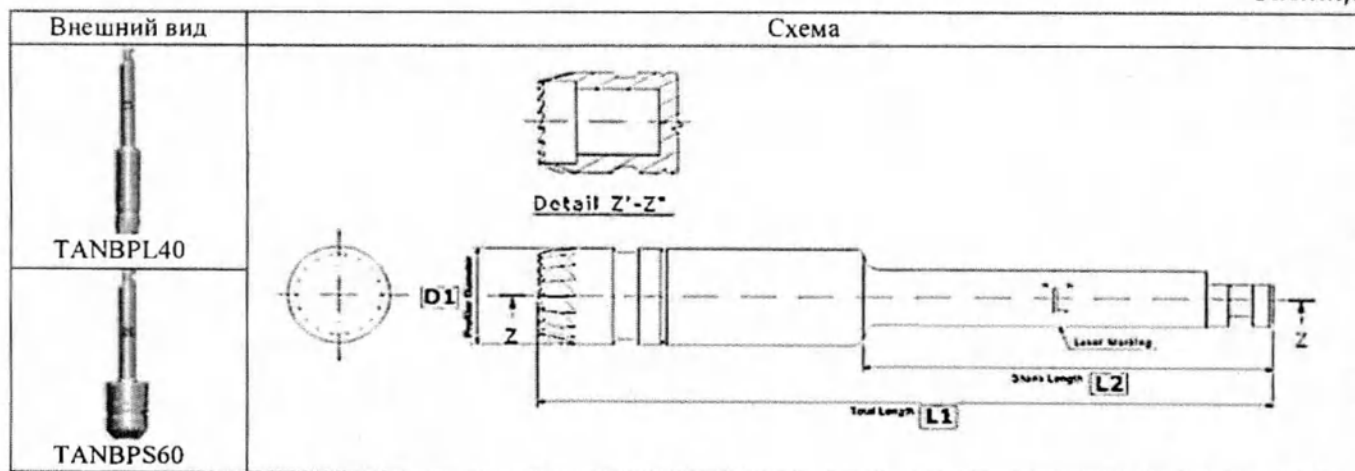Таблица 74.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Лазерная маркировка	Обработка поверхности
		D1 (диаметр профиля) (± 0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (длина хвостовика) (± 0.05)		
Профилировщик кости (Bone Profiler)	TANBPL40	4.00	29.00	16.00	L4	Машинная
	TANBPL50	5.00	29.00	16.00	L5	Машинная
	TANBPS60	6.00	24.00	16.00	S6	Машинная
	TANBPS70	7.00	24.00	16.00	S7	Машинная
В состав упаковки входит Навигационный пин для профилировщика кости (Bone Profiler Guide Pin) TANPGF3305						
Масса – не более 1.503 г.						

- Навигационный пин для профилировщика кости (Bone Profiler Guide Pin)

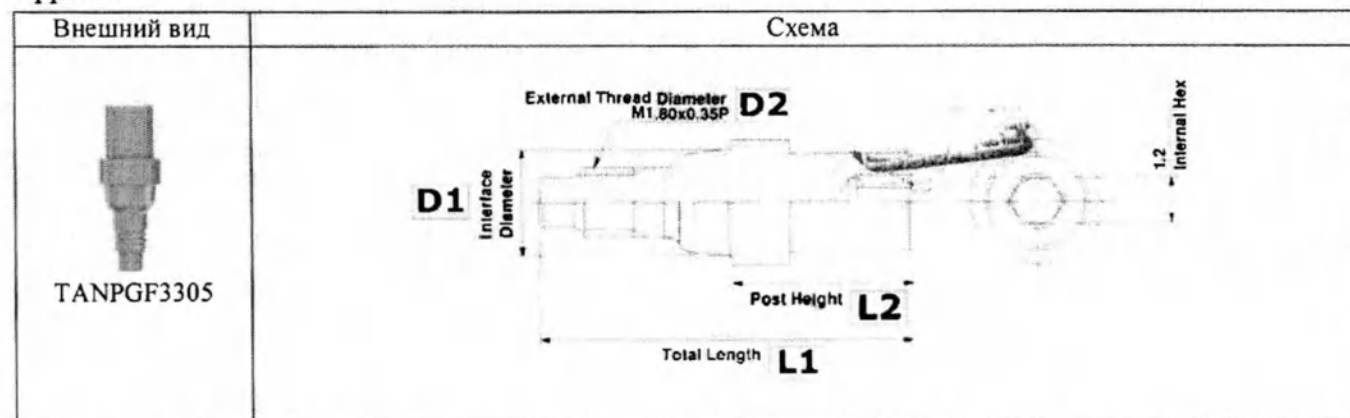Навигационный пин для профилировщика кости фиксируется на имплантате, служит вертикальной направляющей для профилировщика кости, предотвращая смещение фрезы по горизонтали во время препарирования остатков кости, и является ограничителем по глубине для фрезы.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Цвет анодизации
		D1 (диаметр интерфейса) (± 0.05)	D2 (диаметр внешнего винта) (0/-0.2)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (длина ответной части) (± 0.05)	
Навигационный пин для профилировщика	TANPGF3305	2.8	M1.80x0.35P	9.5	4.6	Золотистый

20) Сверло Линдемманна (Lindermann Drill)

Используется для проведения первоначального сверления, а также для исправления неудачного первоначального сверления. Режущая часть имеет канавки для указания глубины сверления, а направляющая часть - лазерную маркировку для указания диаметра сверления. Цилиндрическая направляющая часть предназначена для соединения с наконечником в соответствии с ISO 1797-1:2017. Соответствующая скорость вращения составляет от 1200 до 1500 об/мин. TiN-покрытие: повышенная устойчивость к коррозии и истиранию.

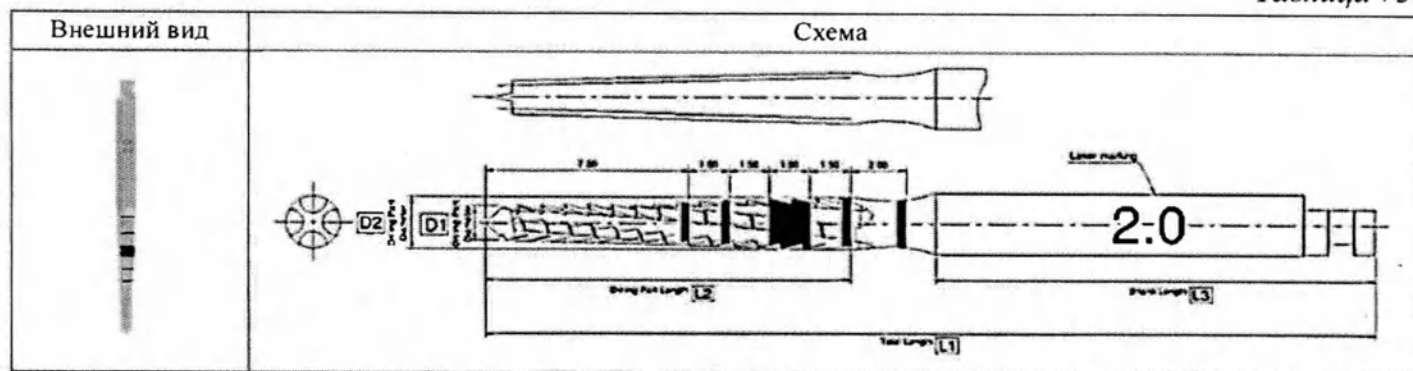Таблица 75.




Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм					Лазерная маркировка	Обработка поверхности
		D1 (диаметр рабочей части)(-0.02)	D2 (диаметр рабочей части) (-0.02)	L1 общая длина) (± 0.05)	L2 (длина рабочей части) (± 0.05)	L3 (длина хвостовика) (± 0.05)		
Сверло Линдемманна (Lindermann Drill)	TEEL200M	1.30	2.00	32.60	13.50	16.00	2.0	TiN
Масса – не более 0.704 г.								

21) Фреза выравнивающая (Flattening Drill)

Используется для выравнивания неровной кости перед использованием фрезы со стоппером. Фреза для выравнивания состоит из сверла для выравнивания и выравнивающей матрицы. Сверло используется для точного наведения точки сверления, а матрица используется для определения положения сверления путем создания границы на неровной поверхности кости. Скорость вращения составляет от 400 до 600 об/мин.

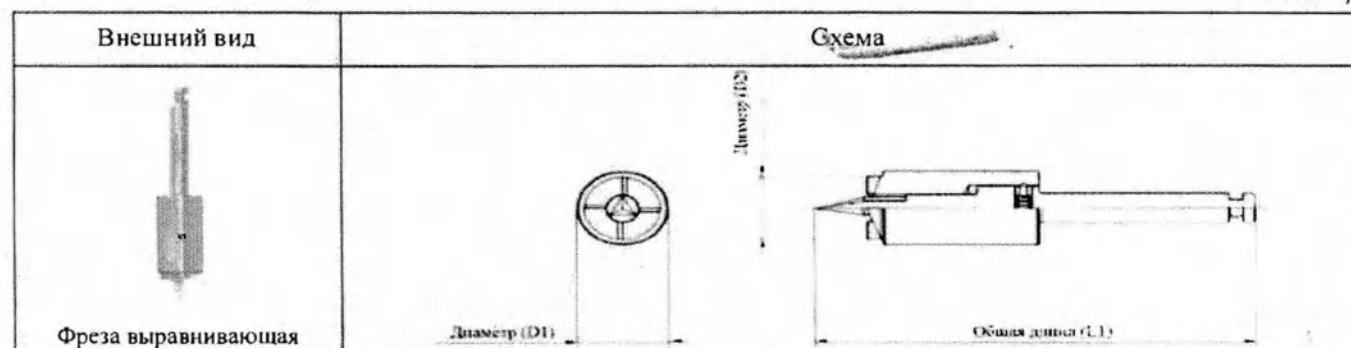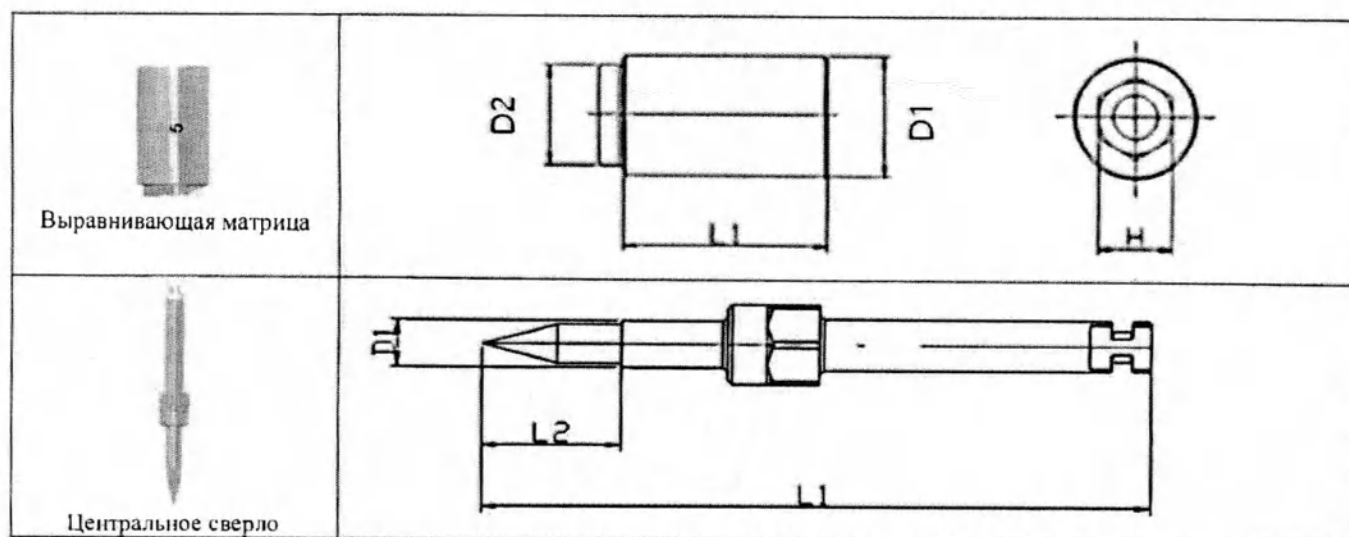Таблица 76.






Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм					Лазерная маркировка	Обработка поверхности
		D1 (общий диаметр) (± 0.05)	D2 диаметр рабочей части) (-0.05)	L1 общая длина) (± 0.05)	L2 (длина рабочей части) (± 0.05)	H (внутренний шестигранник) (± 0.05)		
Фреза выравнивающая (Flattening Drill), состоит из:	FD5020	6.00	5.00	28.50	Н/Д	Н/Д	5	Машинная
	FD6020	7.0	6.0	28.5	Н/Д	Н/Д	6	Машинная
- выравнивающей матрицы	—	6.00	5.00	10.00	Н/Д	3.60	5	Машинная
- центрального сверла	—	2.10	Н/Д	28.50	6.00	Н/Д	Н/Д	Машинная
Масса – не более 2.624г								

22) Перфоратор слизистой оболочки (Tissue Punch)

Используется для безлоскутной хирургии, применяется для разреза мягких тканей и удаления ненужной десны вокруг ортопедического компонента вместо хирургического лезвия. Это помогает уменьшить боль и отек после операции по имплантации. Скорость вращения составляет от 300 до 400 об/мин.

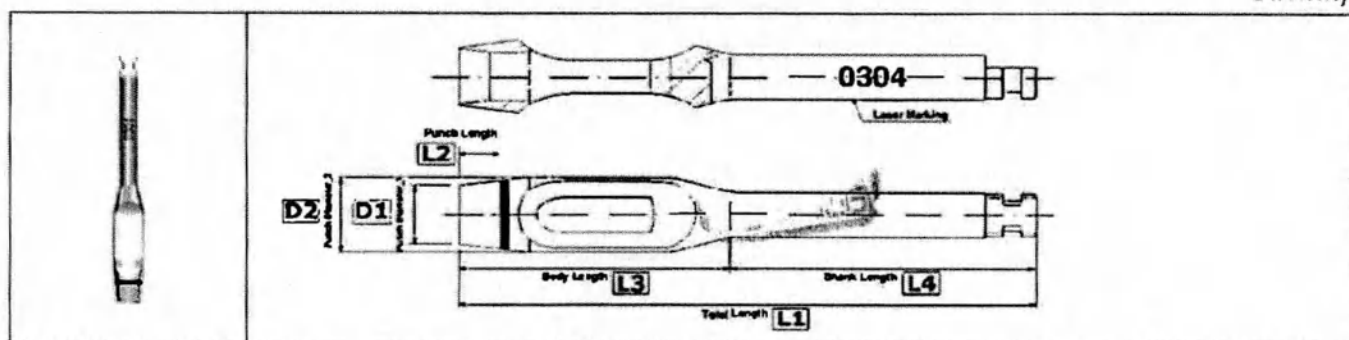Таблица 77.



Размеры:



Наименование	Модель	Размер, мм						Лазерная маркировка	Обработка поверхности
		D1 (диаметр перфоратора) (± 0.05)	D2 (общий диаметр) (± 0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (длина перфоратора) (± 0.05)	L3 (длина рабочей части) (± 0.05)	L4 (длина хвостовика) (± 0.05)		
Перфоратор слизистой оболочки	TCMTPM0304	3.10	4.00	30.00	2.10	14.10	15.90	0304	Машинная
	TCMTPM0405	4.10	5.00	30.00	2.10	14.10	15.90	0405	Машинная
	TCMTPM0506	5.10	6.00	30.00	2.10	14.10	15.90	0506	Машинная

(Tissue Punch)	TCMTPM0607	6.10	7.00	30.00	2.10	14.10	15.90	0607	Машинная
	TCMTPM0708	7.10	8.00	30.00	2.10	14.10	15.90	0708	Машинная
Масса – не более 1.765 г.									

23) Триммер лунки (Hole Trimmer)

Используется для финальной обработки внутреннего диаметра отверстия хирургического шаблона, используемого для установки имплантата при цифровом протоколе. Изделие используется вручную, у него нет показателей скорости вращения.

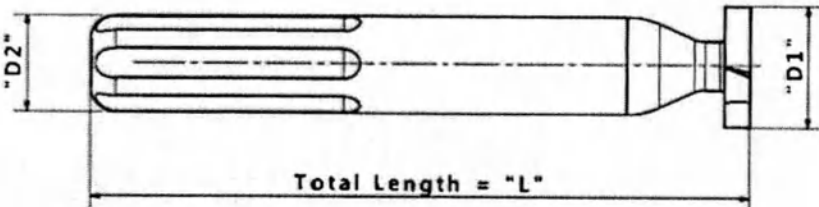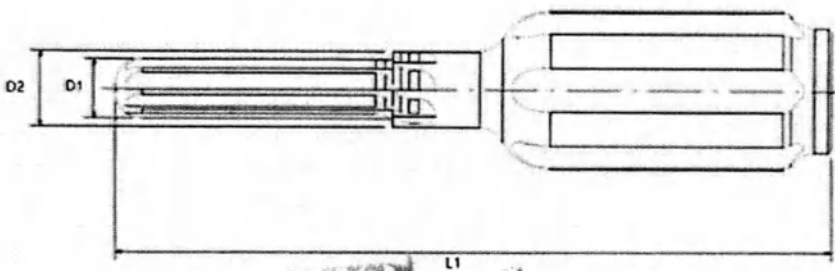Таблица 78.

Внешний вид	Схема
	
	


Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Обработка поверхности
		D1 (диаметр рабочей части) (+0.02/0)	D2 (общий диаметр) (+0.02/0)	L1 (общая длина) (±0.05)	
Триммер лунки (Hole Trimmer)	AGHTN2	4.5	3.5	26.0	Машинная
	AGHTR2	6	5	26.0	Машинная
	AGHTW2	7.5	6.5	26.0	Машинная
	AGHTN3	4.50	3.50	41.00	Машинная
	AGHTR3	6.00	5.00	41.00	Машинная
	AGHTW3	7.30	6.50	41.00	Машинная
Масса – не более 19.405 г.					

24) Фреза Auto-Max (Auto-Max)

Используется для сверления и забора аутогенной кости во время операции по имплантации. Фреза состоит из двух частей: корпуса фрезы Auto-Max и стоппера. Корпус фрезы Auto-Max предназначен для сбора аутогенной кости. Скорость вращения составляет от 300 до 500 об/мин. TiN-покрытие: повышенная устойчивость к коррозии и истиранию.

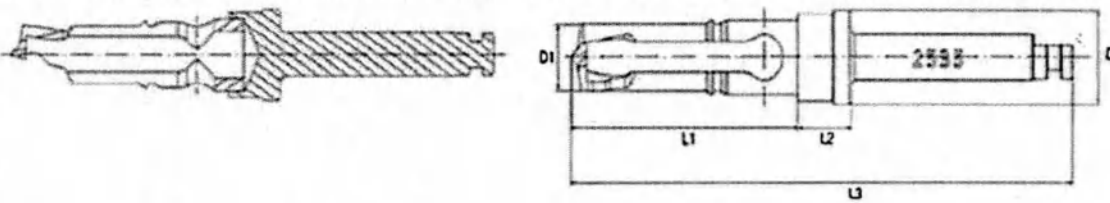Таблица 79.

Внешний вид	Схема
	





Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм					Лазерная маркировка	Обработка поверхности	Цвет анодизации
		D1 (диаметр рабочей части) (± 0.05)	D2 (общий диаметр) (± 0.05)	L1 (длина рабочей части) (± 0.05)	L2 (длина соединяющей шейки) (± 0.05)	L3 (общая длина) (± 0.05)			
Фреза Auto-Max (Auto-Max)	AM2535	3.50	4.95	14.40	3.50	32.70	2535	Машинная	Золотистый
	AM4050	5.00	6.35	15.00	3.50	33.00	4050	Машинная	Золотистый
	AM5060	6.00	7.35	15.10	3.50	33.10	5060	Машинная	Золотистый
	AM6070	7.00	8.35	15.20	3.50	33.20	6070	Машинная	Золотистый
Масса – не более 2.863 г.									

25) Имплантовод машинный (Handpiece Connector)

Имплантовод машинный с уровня имплантата, вставляется в имплантат и используется для переноса имплантата из упаковки в ротовую полость пациента и для закручивания имплантата в ложе с помощью углового наконечника. Когда имплантат вставлен в имплантологическое ложе в кости, крепление имплантата должно быть присоединено к имплантоводу, который передает крутящий момент между креплением имплантата и наконечником. Соединительная часть представлена в трех разных формах: проекции треугольника, шестигранника и восьмигранника в соответствии с креплением имплантата. Цилиндрическая направляющая часть предназначена для соединения с наконечником в соответствии с ISO1797-1:1992.

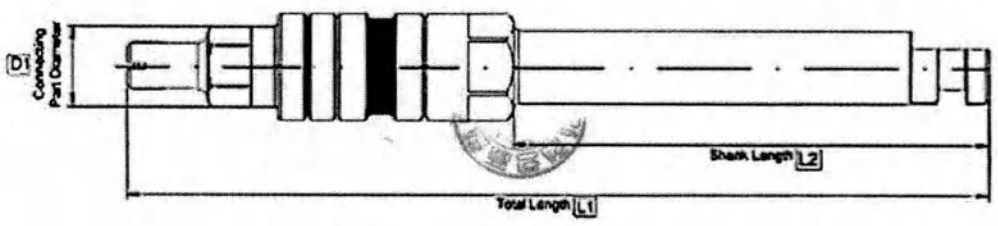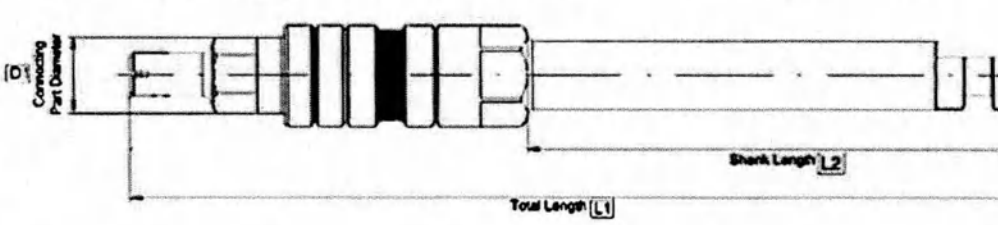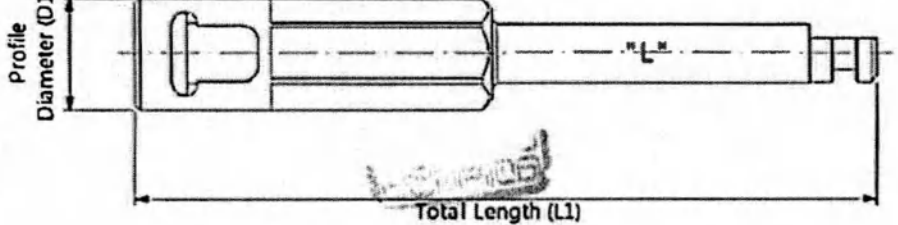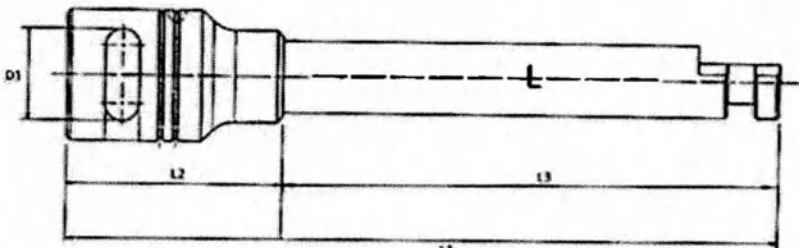Таблица 80.

Внешний вид	Схема
 TANHCS	
 HCL17	
 OHCS	
 TBH250L	




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Лазерная маркировка	Обработка поверхности
		D1 (диаметр профиля) (+0.0.5)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (длина хвостовика) (± 0.05)		
Имплантовод машинный (Handpiece Connector)	TANHCU	2.30	24.20	14.00	U	Машинная
	TANHCS	2.30	29.10	16.00	S	Машинная
	TANHCL	2.30	34.10	16.00	L	Машинная
	HCS17	1.87	29.80	15.00	MI S	Машинная
	HCL17	1.87	30.00	15.00	MI L	Машинная
	OHCS	4.5	22.0	Н/Д	S	Машинная
	TBH250S	3.00	23.00	7.00	TBH250S	Машинная
	TBH250L	3.00	27.50	11.50	TBH250L	Машинная
Масса – не более 1.45 г.						

26) Имплантовод для храпового ключа (Ratchet Connector)

Имплантовод для храпового ключа с уровня имплантата, вставляется в имплантат и используется для переноса имплантата из упаковки в ротовую полость пациента и для закручивания имплантата в ложе с помощью храпового ключа или динамометрического ключа. Наконечник с уровня абатмента используется для переноса и фиксации абатмента в имплантате. Используется для передачи точного крутящего момента между имплантатом и храповым ключом, который используется для контроля окончательного крутящего момента при имплантации изделия. Увеличивает расстояние от храпового ключа до имплантата.

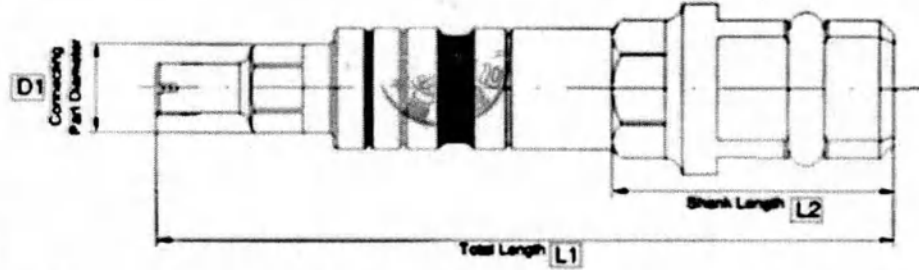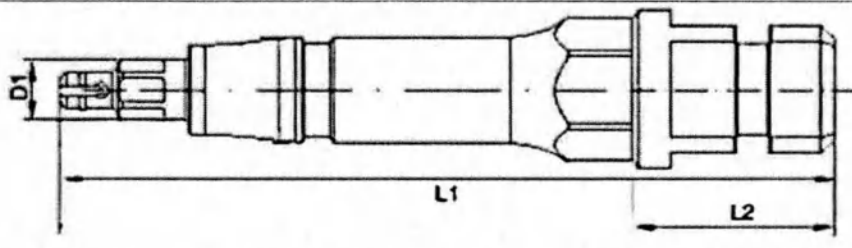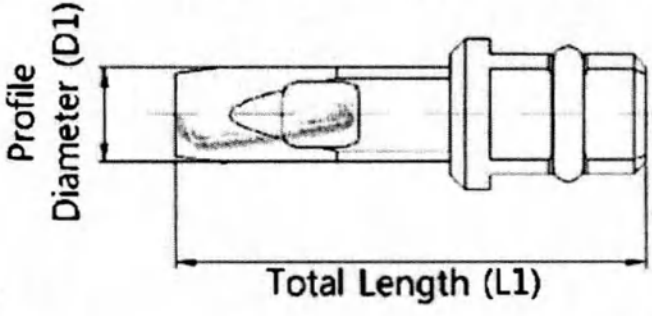Таблица 81.

Внешний вид	Схема
 TANRES	
 RCS17	
 ORCS	

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм			Лазерная маркировка	Обработка поверхности
		D1 (диаметр профиля) (± 0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (длина хвостовика) (± 0.05)		
Имплантовод	TANREU	2.3	16.10	6.00	Н/Д	Машинная

для храпового ключа (Ratchet Connector)	TANRES	2.3	21.1	6.00	S	Машинная
	TANREL	2.3	26.10	6.00	L	Машинная
	RCS17	1.87	24.70	6.00	MI S	Машинная
	RCL17	1.87	29.80	6.00	MI L	Машинная
	ORCS	4.5	17.00	Н/Д	S	Машинная
Масса – не более 1,811г.						

27) Удлинитель фрез (Drill Extension)

Используется для увеличения длины фрезы для удобства использования. Цилиндрическая направляющая часть предназначена для соединения с наконечником в соответствии с ISO1797-1: 1992.

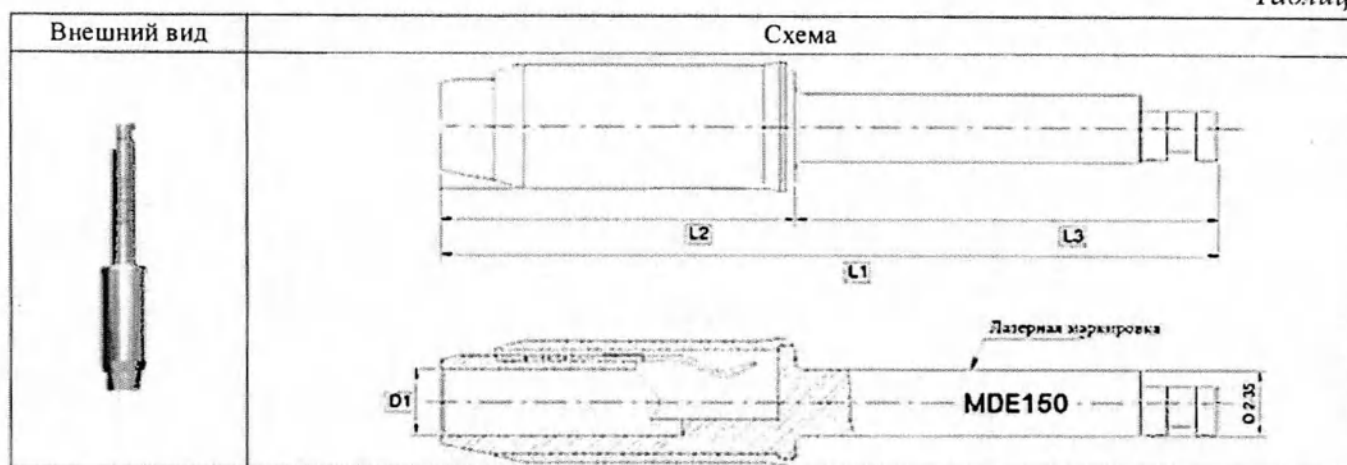Таблица 82.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм				Лазерная маркировка	Обработка поверхности
		D1 (диаметр рабочей части) (±0.05)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (длина рабочей части) (±0.05)	L3 (длина хвостовика) (±0.05)		
Удлинитель фрез (Drill Extension)	MDE150	2.35	25.90	11.90	14.00	MDE150	Машинная
Масса – не более 1.29г.							

28) Пин параллельности (Direction Indicator)

Пин параллельности для ложа под имплантат (Direction Indicator) используется для определения наклона и направления имплантологического ложа, образованного при первоначальном сверлении. Инструмент является двусторонним, вставка меньшего диаметра опускается в ложе после первоначального сверления, вставка большего диаметра применяется после сверления фрезой диаметром 2.00 мм.

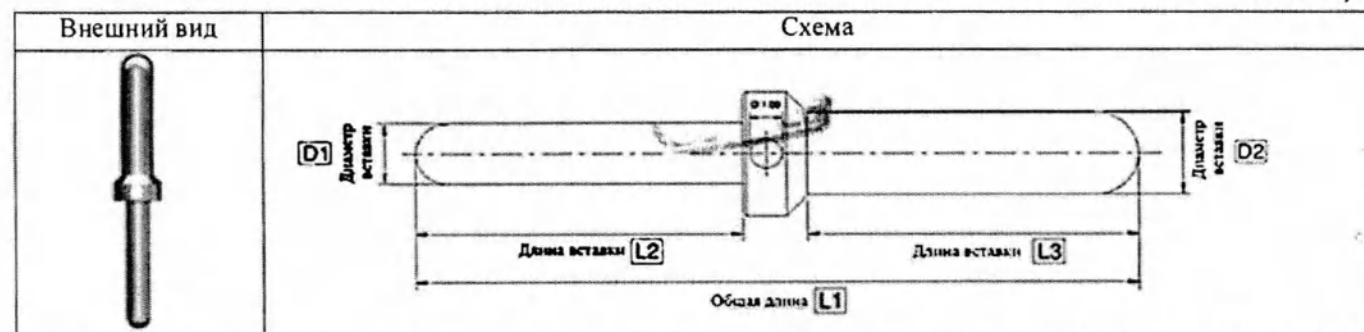Таблица 83.



Размеры:


Наименование	Модель	Размеры, мм					Обработка поверхности и
		D1 (диаметр начальной)	D2 (Диаметр второй)	L1 (общая длина)	L2 (длина начальной вставки)	L3 (длина второй вставки)	

		вставки)	вставки)				
Пин параллельности (Direction Indicator)	MDI100	1.95	2.70	19.00	8.00	8.00	Машинная
Масса – не более 0.590 г.							

29) Ключ динамометрический (Torque Wrench)

Используется для передачи крутящего момента на винт при фиксировании ортопедического компонента в имплантате.

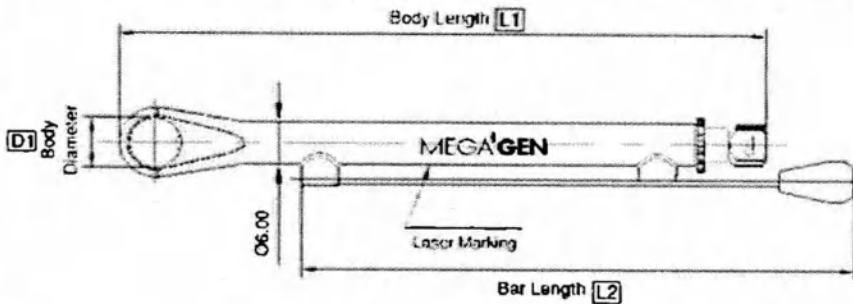Таблица 84.

Внешний вид	Схема
	




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Лазерная маркировка	Обработка поверхности
		D1 (диаметр интерфейса) (± 0.05)	L1 (длина рабочей части) (± 0.05)	L2 (длина штанги) (± 0.05)		
Ключ динамометрический (Torque Wrench)	MTW300A	7,00	84,10	74,90	MEGA'GEN	Машинная
	В состав упаковки входит Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter) TTAR100					
	Масса – не более 20.982 г.					

30) Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter)

Используется для фиксации отвертки в динамометрическом ключе. Используется для соединения динамометрического ключа и отвертки.

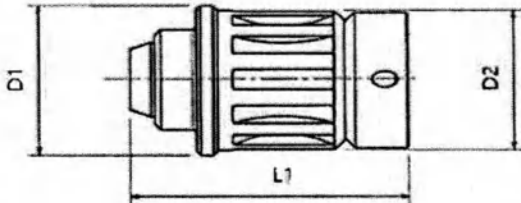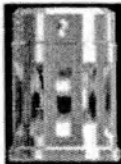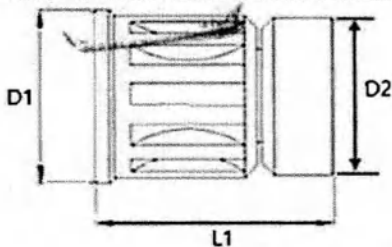Таблица 85.

Внешний вид	Схема
	
	

Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм			Обработка поверхности
		D1 (общий диаметр) (± 0.05)	D2 (диаметр соединяющего кольца) (-0.05/-0.1)	L1 (Общая длина) (± 0.05)	

Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter)	TTA1100	7.50	7.0	10.60	Машинная
	TTAR100	7.50	7.0	8.1	Машинная
	Масса – не более 2,478 г.				

31) Удлинитель для храпового ключа (Ratchet Extension)

Используется для передачи точного крутящего момента между абатментом Meg-Ball и динамометрическим ключом или храповым ключом, при установке абатмента в имплантат.

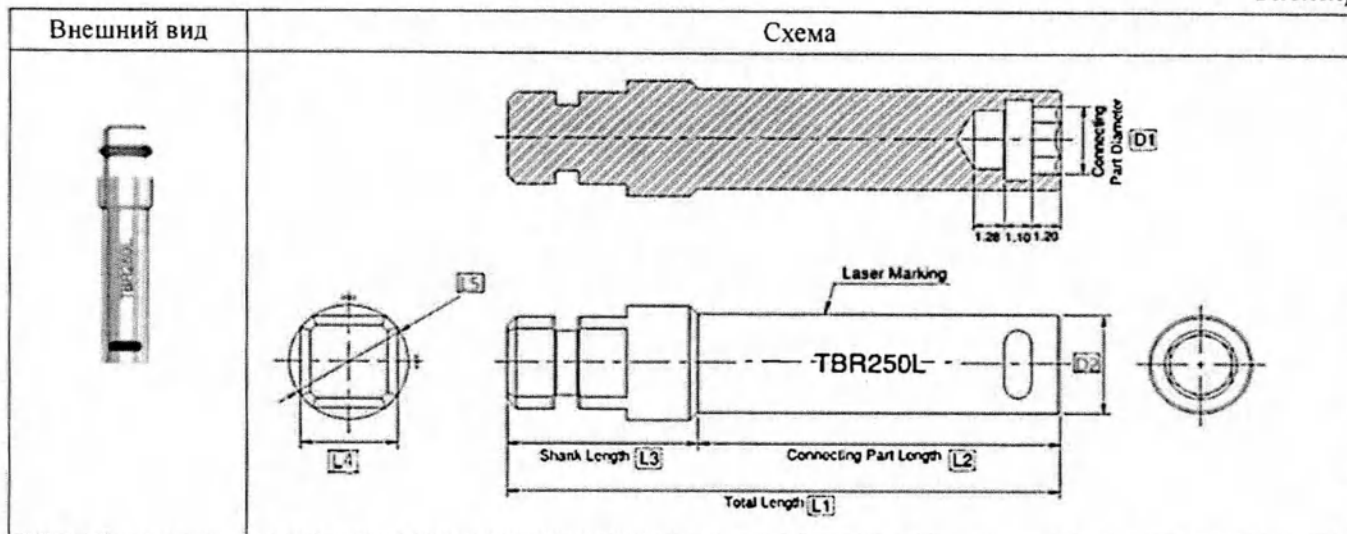Таблица 86.




Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм							Лазерная маркировка	Обработка поверхности
		D1 (диаметр шестигранника рабочей части) (+0.02/0)	D2 (наружный диаметр) (+0.02/0)	L1 (общая длина) (±0.05)	L2 (длина рабочей части) (±0.05)	L3 (длина хвостовика) (±0.05)	L4 (длина стороны хвостовика) (±0.05)	L5 (длина диагональ и хвостовика) (±0.05)		
Удлинитель для храпового ключа (Ratchet Extension)	TBR250S	2.52	4.30	16.00	8.00	8.00	4.00	5.00	TBR250S	Машинная
	TBR250L	2.52	4.30	23.00	15.00	8.00	4.00	5.00	TBR250L	Машинная
Масса – не более 1.777 г.										

32) Отвертка для ключа динамометрического (Torque Driver)

Используется для передачи крутящего момента на винты, которые используются для соединения абатмента в имплантате, без использования адаптера для динамометрического ключа.

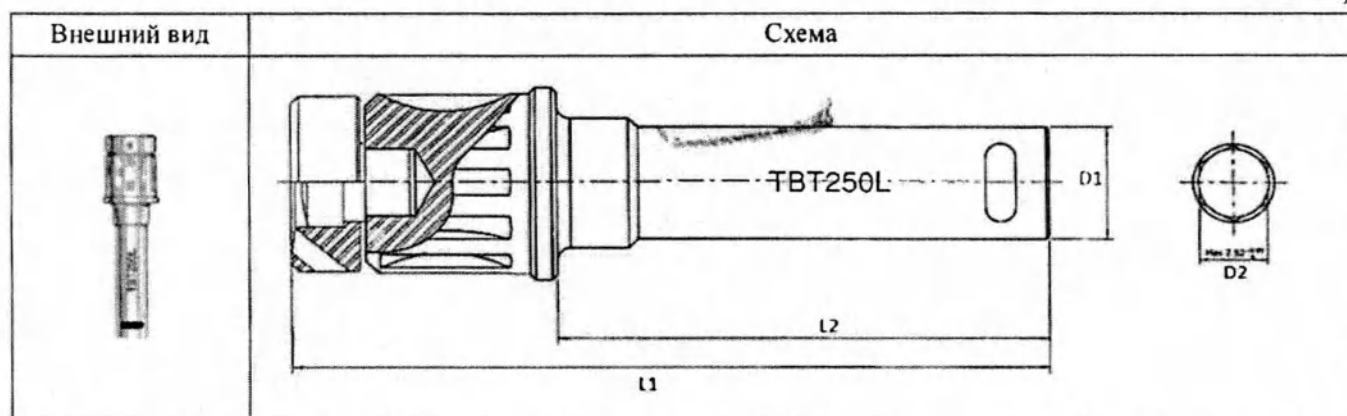Таблица 87.



Размеры:


Наименование	Модель	Размер, мм	Лазерная	Обработка
--------------	--------	------------	----------	-----------

		D1 (диаметр рабочей части) (± 0.05)	D2 (диаметр шестигранни ка интерфейса) ($+0.03$)	L1 (общая длина) (± 0.05)	L2 (длина рабочей части) (± 0.05)	маркировка	поверхност и
Отвертка для ключа динамометрическог о (Torque Driver)	TBT250S	4.30	2.52	20.70	11.00	TBT250S	Машинная
	TBT250L	4.30	2.52	27.70	18.00	TBT250L	Машинная
	Масса – не более 4,720 г.						

33) Втулка шаблона (Stent Sleeve)

Устанавливается в специальные отверстия хирургического шаблона, и является направляющей для пилотных и финишных фрез, позволяя подготовить имплантационное ложе и установить имплантат в нужной позиции с максимальной точностью.

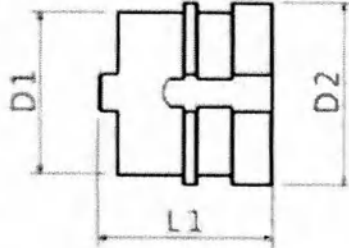Таблица 88.

Внешний вид	Схема
	

Размеры:

Наименование	Модель	Размер, мм			Обработка поверхности
		D1 (диаметр интерфейса) (± 0.05)	D2 (общий диаметр) (± 0.05)	L1 (общая длина) (± 0.05)	
Втулка шаблона (Stent Sleeve)	R2SS35	4.9	6.40	5.80	машинная
	R2SS50	6.4	7.90	5.80	машинная
	R2SS65	7.9	9.40	5.80	машинная
Масса – не более 0.805 г.					

10. Комплект поставки изделия

10.1. Общий комплект поставки указан в Таблице 89:

Таблица 89.

№	Наименование Изделия	Кол-во, шт./ко мплект	Пунк т докум ента
Система дентальных имплантатов, в составе:			
I	Имплантаты дентальные (Dental Implants)		10.2
1.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	1	
2.	Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)	1	
II	Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)	1	10.3
III	Компоненты ортопедические (Prosthetic Components)		10.4.1
1.	Абатмент временный (Temporary Abutment)	1	
2.	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	1	
3.	Абатмент CCM (CCM Abutment)	1	
4.	Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment)	1	
5.	Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)	1	
6.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	1	
7.	Абатмент Octa (Octa Abutment)	1	

8.	Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)	1	
9.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	1	
10.	Абатмент примерочный (Try-in Abutment)	1	
11.	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	1	
12.	Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)	1	
13.	Абатмент сканируемый (Scan Abutment)	1	
14.	Абатмент сканируемый Тип С (Scan Abutment C-type)	1	
15.	Абатмент премил (TiGen Abutment)	1	
16.	Винт-заглушка (Cover Screw)	1	
17.	Винт-заглушка i-Gen (i-Gen Cover Screw)	1	
18.	Винт i-Gen (i-Gen Screw)	1	
19.	Винт Multi Post (Multi Post Screw)	1	
20.	Винт абатмента (Abutment Screw)	1	
21.	Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Abutment Screw)	1	
22.	Винт цилиндра (Cylinder Screw)	1	
23.	Винт S.H.A (S.H.A Screw)	1	
24.	Навигационный пин (Guide Pin)	1	
25.	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)	1	
26.	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coping, Pick-up)	1	
27.	Трансфер слепочный металлический (Stainless Impression Coping)	1	
28.	Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)	1	
29.	Аналог лабораторный (Lab Analog)	1	
30.	Аналог RP (RP Analog)	1	
31.	Цилиндр временный (Temporary Cylinder)	1	
32.	Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)	1	
33.	Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder)	1	
34.	Цилиндр ССМ (CCM Cylinder)	1	
35.	Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder)	1	
36.	Колпачок защитный (Comfort Cap)	1	
37.	Колпачок предохраняющий (Healing Cap)	1	
38.	Скан пост (Scan Post)	1	
39.	Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap)	1	
40.	Металлическая матрица с ретенционным кольцом (Metal Housing)	1	
41.	Ретенционное кольцо (Retentive Ring)	1	
42.	Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)	1	
43.	Колпачок ретенционный (Retentive Cap)	1	
IV	Формирователь десны (Healing Abutment)		10.4.2
1.	Формирователь десны (Healing Abutment)	1	
2.	Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)	1	
3.	Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment)	1	
V	Титановое основание (ZrGen Abutment)		10.4.3
1.	Титановое основание (ZrGen Abutment)	1	
2.	Титановое основание Тип С (ZrGen Abutment C-Type)	1	
VI	Набор Meg-Ball для съемного протезирования (Meg-Ball Package)	1	10.4.4
VII	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	1	10.4.5
VIII	Инструменты стоматологические (Dental Instruments)		10.4.6
1.	Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)	1	
2.	Отвертка Multi-unit (Multi-unit Driver)	1	
3.	Отвертка для извлечения Multi-unit (Multi-unit Removal Driver)	1	

4.	Отвертка ручная (Hand Driver)	1
5.	Отвертка машинная Multi-unit (Right Angle Driver Multi-unit)	1
6.	Отвертка для слепочного трансфера (Impression Driver)	1
7.	Отвертка для извлечения абатмента (Abutment Removal Driver)	1
8.	Отвертка Octa (Octa Driver)	1
9.	Отвертка для углового наконечника (Right Angle Driver)	1
10.	Отвертка установочная (Insert Driver)	1
11.	Отвертка для установки ретенционного колпачка (Retentive Cap Insertion Tool)	1
12.	Сверло копьевидное (Lance Drill)	1
13.	Фреза маркировочная (Marking Drill)	1
14.	Фреза формирующая (Shaping Drill)	1
15.	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	1
16.	Трепан с центральным пином (Point Trephine Bur)	1
17.	Фреза кортикальная (Cortical Bone Drill)	1
18.	Бур трепанационный (Trephine Bur)	1
19.	Профилировщик кости (Bone Profiler)	1
20.	Сверло Линдемманна (Lindermann Drill)	1
21.	Фреза выравнивающая (Flattening Drill)	1
22.	Перфоратор слизистой оболочки (Tissue Punch)	1
23.	Триммер лунки (Hole Trimmer)	1
24.	Фреза Auto-Max (Auto-Max)	1
25.	Имплантовод машинный (Handpiece Connector)	1
26.	Имплантовод для храпового ключа (Ratchet Connector)	1
27.	Удлинитель фрез (Drill Extension)	1
28.	Пин параллельности (Directon Indicator)	1
29.	Ключ динамометрический (Torque Wrench)	1
30.	Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter)	1
31.	Удлинитель для храпового ключа (Ratchet Extension)	1
32.	Отвертка для ключа динамометрического (Torque Driver)	1
33.	Втулка шаблона (Stent Sleeve)	1
IX	Инструкция по применению	1

10.2. Комплект поставки Имплантатов дентальных.

Примечание: Код ссылки означает код заказа изделия. При заказе продукции используется ссылочный код с дополнительным кодом, таким как С после названия модели.

1. Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)

№	Комплект поставки	Исполнение изделия	Кол-во, шт. в упаковке	Код заказа изделия (артикул)
1.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX3507	1	FANIHX3507C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
2.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX3508	1	FANIHX3508C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
3.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX3510	1	FANIHX3510C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	

	Инструкция по применению		1	
4.	Имплантат дентальный с внутренним соединением XPEED AnyRidge® (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX3511	1	FANIHX3511C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
5.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX3513	1	FANIHX3513C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
6.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX3515	1	FANIHX3515C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
7.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX3518	1	FANIHX3518C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
8.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX4007	1	FANIHX4007C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
9.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX4008	1	FANIHX4008C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
10.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX4010	1	FANIHX4010C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
11.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX4011	1	FANIHX4011C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
12.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX4013	1	FANIHX4013C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
13.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX4015	1	FANIHX4015C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
14.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX4018	1	FANIHX4018C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
15.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX4507	1	FANIHX4507C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
16.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX4508	1	FANIHX4508C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	

	Инструкция по применению		1	
17.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX4510	1	FANIHX4510C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
18.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX4511	1	FANIHX4511C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
19.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX4513	1	FANIHX4513C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
20.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX4515	1	FANIHX4515C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
21.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX4518	1	FANIHX4518C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
22.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX5007	1	FANIHX5007C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
23.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX5008	1	FANIHX5008C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
24.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX5010	1	FANIHX5010C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
25.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX5011	1	FANIHX5011C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
26.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX5013	1	FANIHX5013C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
27.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX5015	1	FANIHX5015C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
28.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX5018	1	FANIHX5018C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
29.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIHX5507	1	FANIHX5507C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	

	Инструкция по применению		1	
30.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIH5508	1	FANIH5508C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
31.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIH5510	1	FANIH5510C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
32.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIH5511	1	FANIH5511C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
33.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIH5513	1	FANIH5513C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
34.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIH5515	1	FANIH5515C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
35.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FANIH5518	1	FANIH5518C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
36.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALIH6007	1	FALIH6007C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
37.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALIH6008	1	FALIH6008C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
38.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALIH6010	1	FALIH6010C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
39.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALIH6011	1	FALIH6011C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
40.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALIH6013	1	FALIH6013C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
41.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALIH6507	1	FALIH6507C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
42.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALIH6508	1	FALIH6508C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	

	Инструкция по применению		1	
43.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX6510	1	FALHX6510C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
44.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX6511	1	FALHX6511C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
45.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX6513	1	FALHX6513C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
46.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX7007	1	FALHX7007C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
47.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX7008	1	FALHX7008C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
48.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX7010	1	FALHX7010C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
49.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX7011	1	FALHX7011C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
50.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX7013	1	FALHX7013C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
51.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX7507	1	FALHX7507C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
52.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX7508	1	FALHX7508C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
53.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX7510	1	FALHX7510C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
54.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX7511	1	FALHX7511C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
55.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX7513	1	FALHX7513C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	

56.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX8007	1	FALHX8007C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
57.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX8008	1	FALHX8008C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
58.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX8010	1	FALHX8010C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
59.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX8011	1	FALHX8011C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
60.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	FALHX8013	1	FALHX8013C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
61.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR384507	1	AR384507C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
62.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR384508	1	AR384508C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
63.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR384510	1	AR384510C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
64.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR384511	1	AR384511C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
65.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR384513	1	AR384513C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
66.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR384515	1	AR384515C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
67.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR384518	1	AR384518C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
68.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385007	1	AR385007C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	

69.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385008	1	AR385008C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
70.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385010	1	AR385010C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
71.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385011	1	AR385011C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
72.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385013	1	AR385013C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
73.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385015	1	AR385015C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
74.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385018	1	AR385018C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
75.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435007	1	AR435007C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
76.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435008	1	AR435008C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
77.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435010	1	AR435010C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
78.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435011	1	AR435011C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
79.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435013	1	AR435013C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
80.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435015	1	AR435015C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
81.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435018	1	AR435018C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	

82.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385507	1	AR385507C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
83.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385508	1	AR385508C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
84.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385510	1	AR385510C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
85.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385511	1	AR385511C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
86.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385513	1	AR385513C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
87.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385515	1	AR385515C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
88.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385518	1	AR385518C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
89.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435507	1	AR435507C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
90.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435508	1	AR435508C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
91.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435510	1	AR435510C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
92.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435511	1	AR435511C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
93.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435513	1	AR435513C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
94.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435515	1	AR435515C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	

95.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435518	1	AR435518C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
96.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR436007	1	AR436007C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
97.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR436008	1	AR436008C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
98.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR436010	1	AR436010C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
99.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR436011	1	AR436011C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
100.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR436013	1	AR436013C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
101.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR485507	1	AR485507C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
102.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR485508	1	AR485508C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
103.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR485510	1	AR485510C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
104.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR485511	1	AR485511C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
105.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR485513	1	AR485513C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
106.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR485515	1	AR485515C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
107.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR333505	1	AR333505C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	

108.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR334005	1	AR334005C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
109.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR334505	1	AR334505C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
110.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR384505	1	AR384505C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
111.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR335005	1	AR335005C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
112.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385005	1	AR385005C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
113.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435005	1	AR435005C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
114.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR335505	1	AR335505C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
115.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR385505	1	AR385505C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
116.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR435505	1	AR435505C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	
117.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	AR485505	1	AR485505C
	Винт-заглушка	AANCSF3508	1	
	Инструкция по применению		1	

2. Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)

№	Комплект поставки	Исполнение изделия	Кол-во, шт. в упаковке	Код заказа изделия (артикул)
1	Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)	MIIF3010	1	MIIF3010C
	Винт-заглушка	MICS2505	1	
	Инструкция по применению		1	
2	Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)	MIIF3011	1	MIIF3011C
	Винт-заглушка	MICS2505	1	

	Инструкция по применению		1	
3	Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)	MIIF3013	1	MIIF3013C
	Винт-заглушка	MICS2505	1	
	Инструкция по применению		1	
4	Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)	MIIF3015	1	MIIF3015C
	Винт-заглушка	MICS2505	1	
	Инструкция по применению		1	
5	Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)	MIIF3308	1	MIIF3308C
	Винт-заглушка	MICS2505	1	
	Инструкция по применению		1	
6	Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)	MIIF3310	1	MIIF3310C
	Винт-заглушка	MICS2505	1	
	Инструкция по применению		1	
7	Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)	MIIF3311	1	MIIF3311C
	Винт-заглушка	MICS2505	1	
	Инструкция по применению		1	
8	Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)	MIIF3313	1	MIIF3313C
	Винт-заглушка	MICS2505	1	
	Инструкция по применению		1	
9	Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)	MIIF3315	1	MIIF3315C
	Винт-заглушка	MICS2505	1	
	Инструкция по применению		1	

10.3 Комплект поставки Мембраны i-Gen

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane) упаковке 1 шт.
1	Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)	IG1W4509	IG1W4509
2	Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)	IG1W5510	IG1W5510
3	Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)	IG1W6511	IG1W6511
4	Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)	IG2W0918	IG2W0918
5	Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)	IG2W1120	IG2W1120
6	Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)	IG2W1323	IG2W1323
7	Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)	IG3W0921	IG3W0921
8	Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)	IG3W1125	IG3W1125
9	Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)	IG3W1328	IG3W1328
10	Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)	IG4W1128	IG4W1128

10.4 Комплект поставки компонентов ортопедических, формирователей десны, титановых оснований, Набора Meg-Ball, Набора Meg-Rhein и инструментов стоматологических.

Примечание: Код ссылки означает код заказа изделия. При заказе продукции используется ссылочный код с дополнительным кодом, таким как T, L, C, LC, P, MTN, HT, G после названия модели.

10.4.1. Компоненты ортопедические (Prosthetic Components):

1. Абатмент временный (Temporary Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)		
			Абатмент временный (Temporary Abutment)	Винт Multi Post (Multi Post Screw)	Винт абатмента (Abutment screw)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.
1	Абатмент временный (Temporary Abutment)	AANTMN4012T	AANTMN4012	AANMSF	-
2	Абатмент временный (Temporary Abutment)	AANTMH4012T	AANTMH4012	AANMSF	-
3	Абатмент временный (Temporary Abutment)	MITA3012HT	MITA3012H	-	MIAS14

2. Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)		
			Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	Винт Multi Post (Multi Post Screw)	Винт абатмента (Abutment Screw)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 2 шт.	в упаковке 1 шт.
1	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH4025L	AANEPH4025	AANMSF AANMST	-
2	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH4035L	AANEPH4035	AANMSF AANMST	-
3	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH4045L	AANEPH4045	AANMSF AANMST	-
4	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH4055L	AANEPH4055	AANMSF AANMST	-
5	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH4027L	AANEPH4027	AANMSF AANMST	-
6	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH4037L	AANEPH4037	AANMSF AANMST	-
7	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH4047L	AANEPH4047	AANMSF AANMST	-
8	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH4057L	AANEPH4057	AANMSF AANMST	-
9	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN4025L	AANEPN4025	AANMSF AANMST	-
10	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN4035L	AANEPN4035	AANMSF AANMST	-
11	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN4045L	AANEPN4045	AANMSF AANMST	-
12	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN4055L	AANEPN4055	AANMSF	-

	Abutment)			AANMST	
13	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN4027L	AANEPN4027	AANMSF AANMST	-
14	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN4037L	AANEPN4037	AANMSF AANMST	-
15	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN4047L	AANEPN4047	AANMSF AANMST	-
16	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN4057L	AANEPN4057	AANMSF AANMST	-
17	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH5025L	AANEPH5025	AANMSF AANMST	-
18	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH5035L	AANEPH5035	AANMSF AANMST	-
19	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH5045L	AANEPH5045	AANMSF AANMST	-
20	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH5055L	AANEPH5055	AANMSF AANMST	-
21	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH5027L	AANEPH5027	AANMSF AANMST	-
22	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH5037L	AANEPH5037	AANMSF AANMST	-
23	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH5047L	AANEPH5047	AANMSF AANMST	-
24	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH5057L	AANEPH5057	AANMSF AANMST	-
25	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN5025L	AANEPN5025	AANMSF AANMST	-
26	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN5035L	AANEPN5035	AANMSF AANMST	-
27	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN5045L	AANEPN5045	AANMSF AANMST	-
28	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN5055L	AANEPN5055	AANMSF AANMST	-
29	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN5027L	AANEPN5027	AANMSF AANMST	-
30	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN5037L	AANEPN5037	AANMSF AANMST	-
31	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN5047L	AANEPN5047	AANMSF AANMST	-
32	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN5057L	AANEPN5057	AANMSF AANMST	-
33	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH6025L	AANEPH6025	AANMSF AANMST	-
34	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH6035L	AANEPH6035	AANMSF AANMST	-
35	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH6045L	AANEPH6045	AANMSF AANMST	-
36	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH6055L	AANEPH6055	AANMSF AANMST	-
37	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH6027L	AANEPH6027	AANMSF AANMST	-
38	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH6037L	AANEPH6037	AANMSF AANMST	-
39	Абатмент EZ Post (EZ Post	AANEPH6047L	AANEPH6047	AANMSF	-

	Abutment)			AANMST	
40	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH6057L	AANEPH6057	AANMSF AANMST	-
41	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN6025L	AANEPN6025	AANMSF AANMST	-
42	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN6035L	AANEPN6035	AANMSF AANMST	-
43	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN6045L	AANEPN6045	AANMSF AANMST	-
44	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN6055L	AANEPN6055	AANMSF AANMST	-
45	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN6027L	AANEPN6027	AANMSF AANMST	-
46	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN6037L	AANEPN6037	AANMSF AANMST	-
47	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN6047L	AANEPN6047	AANMSF AANMST	-
48	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN6057L	AANEPN6057	AANMSF AANMST	-
49	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH7025L	AANEPH7025	AANMSF AANMST	-
50	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH7035L	AANEPH7035	AANMSF AANMST	-
51	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH7045L	AANEPH7045	AANMSF AANMST	-
52	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH7055L	AANEPH7055	AANMSF AANMST	-
53	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH7027L	AANEPH7027	AANMSF AANMST	-
54	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH7037L	AANEPH7037	AANMSF AANMST	-
55	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH7047L	AANEPH7047	AANMSF AANMST	-
56	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPH7057L	AANEPH7057	AANMSF AANMST	-
57	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN7025L	AANEPN7025	AANMSF AANMST	-
58	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN7035L	AANEPN7035	AANMSF AANMST	-
59	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN7045L	AANEPN7045	AANMSF AANMST	-
60	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN7055L	AANEPN7055	AANMSF AANMST	-
61	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN7027L	AANEPN7027	AANMSF AANMST	-
62	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN7037L	AANEPN7037	AANMSF AANMST	-
63	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN7047L	AANEPN7047	AANMSF AANMST	-
64	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	AANEPN7057L	AANEPN7057	AANMSF AANMST	-
65	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	MIEP3505HT	MIEP3505H	-	MIAS14
66	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	MIEP3515HT	MIEP3515H	-	MIAS14

	Abutment)				
67	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	MIEP3525HT	MIEP3525H	-	MIAS14
68	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	MIEP3535HT	MIEP3535H	-	MIAS14
69	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	MIEP3545HT	MIEP3545H	-	MIAS14
70	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	MIEP3507HT	MIEP3507H	-	MIAS14
71	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	MIEP3517HT	MIEP3517H	-	MIAS14
72	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	MIEP3527HT	MIEP3527H	-	MIAS14
73	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	MIEP3537HT	MIEP3537H	-	MIAS14
74	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	MIEP3547HT	MIEP3547H	-	MIAS14

3. Абатмент CCM (CCM Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)	
			Абатмент CCM (CCM Abutment)	Винт Multi Post (Multi Post Screw)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 2 шт.
1	Абатмент CCM (CCM Abutment)	AANCAN4012L	AANCAN4012	AANMSF AANMST
2	Абатмент CCM (CCM Abutment)	AANCAH4012L	AANCAH4012	AANMSF AANMST

4. Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)	
			Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment)	Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.
1	Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment)	MUAARN0015C	MUAARN0015	MUASC
2	Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment)	MUAARN0025C	MUAARN0025	MUASC
3	Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment)	MUAARN0035C	MUAARN0035	MUASC
4	Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment)	MUAARN0045C	MUAARN0045	MUASC

5. Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)		
			Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)	Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Abutment Screw)	Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)

			в упаковке 1 шт.	в упаковке 2 шт.	в упаковке 1 шт.
1	Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)	MUAARH1725LC	MUAARH1725	MUAARSF MUAARST	MUAAC
2	Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)	MUAARH1735LC	MUAARH1735	MUAARSF MUAARST	MUAAC
3	Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)	MUAARH1745LC	MUAARH1745	MUAARSF MUAARST	MUAAC
4	Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)	MUAARN1725LC	MUAARN1725	MUAARSF MUAARST	MUAAC
5	Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)	MUAARN1735LC	MUAARN1735	MUAARSF MUAARST	MUAAC
6	Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)	MUAARN1745LC	MUAARN1745	MUAARSF MUAARST	MUAAC
7	Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)	MUAARH3035LC	MUAARH3035	MUAARSF MUAARST	MUAAC
8	Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)	MUAARH3045LC	MUAARH3045	MUAARSF MUAARST	MUAAC
9	Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)	MUAARN3035LC	MUAARN3035	MUAARSF MUAARST	MUAAC
10	Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)	MUAARN3045LC	MUAARN3045	MUAARSF MUAARST	MUAAC

6. Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)		
			Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	Винт Multi Post (Multi Post Screw)	Винт абатмента (Abutment Screw)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 2 шт.	в упаковке 1 шт.
1.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH4029L	AANMAH4029	AANMSF AANMST	-
2.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH4039L	AANMAH4039	AANMSF AANMST	-
3.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH4049L	AANMAH4049	AANMSF AANMST	-
4.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH4059L	AANMAH4059	AANMSF AANMST	-
5.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH5029L	AANMAH5029	AANMSF AANMST	-
6.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH5039L	AANMAH5039	AANMSF AANMST	-
7.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH5049L	AANMAH5049	AANMSF AANMST	-
8.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH5059L	AANMAH5059	AANMSF AANMST	-

9.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH6029L	AANMAH6029	AANMSF AANMST	-
10.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH6039L	AANMAH6039	AANMSF AANMST	-
11.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH6049L	AANMAH6049	AANMSF AANMST	-
12.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH6059L	AANMAH6059	AANMSF AANMST	-
13.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH7029L	AANMAH7029	AANMSF AANMST	-
14.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH7039L	AANMAH7039	AANMSF AANMST	-
15.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH7049L	AANMAH7049	AANMSF AANMST	-
16.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	AANMAH7059L	AANMAH7059	AANMSF AANMST	-
17.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	ARBOT4019HL	ARBOT4019H	AANMSF AANMST	-
18.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	ARBOT4019NL	ARBOT4019N	AANMSF AANMST	-
19.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3005HT	MIMA3005H	-	MIAS14
20.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3015HT	MIMA3015H	-	MIAS14
21.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3025HT	MIMA3025H	-	MIAS14
22.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3035HT	MIMA3035H	-	MIAS14
23.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3045HT	MIMA3045H	-	MIAS14
24.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3007HT	MIMA3007H	-	MIAS14
25.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3017HT	MIMA3017H	-	MIAS14
26.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3027HT	MIMA3027H	-	MIAS14
27.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3037HT	MIMA3037H	-	MIAS14
28.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3047HT	MIMA3047H	-	MIAS14
29.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3505HT	MIMA3505H	-	MIAS14
30.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3515HT	MIMA3515H	-	MIAS14
31.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3525HT	MIMA3525H	-	MIAS14
32.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3535HT	MIMA3535H	-	MIAS14
33.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3545HT	MIMA3545H	-	MIAS14
34.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3507HT	MIMA3507H	-	MIAS14
35.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3517HT	MIMA3517H	-	MIAS14
36.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3527HT	MIMA3527H	-	MIAS14
37.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	MIMA3537HT	MIMA3537H	-	MIAS14
38.	Абатмент обтачиваемый	MIMA3547HT	MIMA3547H	-	MIAS14

(Milling Abutment)				
--------------------	--	--	--	--

7. Абатмент Octa (Octa Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Абатмент Octa (Octa Abutment)
			в упаковке 1 шт.
1	Абатмент Octa (Octa Abutment)	AANOAF4010	AANOAF4010
2	Абатмент Octa (Octa Abutment)	AANOAF4020	AANOAF4020
3	Абатмент Octa (Octa Abutment)	AANOAF4030	AANOAF4030
4	Абатмент Octa (Octa Abutment)	AANOAF4040	AANOAF4040
5	Абатмент Octa (Octa Abutment)	AANOAF4050	AANOAF4050
6	Абатмент Octa (Octa Abutment)	AANOAF0010	AANOAF0010
7	Абатмент Octa (Octa Abutment)	AANOAF0020	AANOAF0020
8	Абатмент Octa (Octa Abutment)	AANOAF0030	AANOAF0030
9	Абатмент Octa (Octa Abutment)	AANOAF0040	AANOAF0040
10	Абатмент Octa (Octa Abutment)	AANOAF0050	AANOAF0050

8. Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)			
			Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)	Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap)	Винт Multi Post (Multi Post Screw)	Винт абатмента (Abutment Screw)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.
1	Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)	AFAP5545P	AFAP5545	AFCP	AANMS F	-
2	Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)	AFAA5415P	AFAA5415	AFCA15	AANMS F	-
3	Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)	AFAA5425P	AFAA5425	AFCA25	AANMS F	-
4	Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)	AANTAH5012 T	AANTAH5012	-	AANMS F	-
5	Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)	MFAP3545P	MFAP3545	MFCP	-	MIAS14
6	Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)	MFAA3415P	MFAA3415	MFCA15	-	MIAS14

Abutment)					
-----------	--	--	--	--	--

9. Абатмент угловой (Angled Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)		
			Абатмент угловой (Angled Abutment)	Винт Multi Post (Multi Post Screw)	Винт абатмента (Abutment Screw)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 2 шт.	в упаковке 1 шт.
1.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH4215L	AANA AH4215	AANMSF AANMST	-
2.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH4315L	AANA AH4315	AANMSF AANMST	-
3.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH4415L	AANA AH4415	AANMSF AANMST	-
4.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH4515L	AANA AH4515	AANMSF AANMST	-
5.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH5215L	AANA AH5215	AANMSF AANMST	-
6.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH5315L	AANA AH5315	AANMSF AANMST	-
7.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH5415L	AANA AH5415	AANMSF AANMST	-
8.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH5515L	AANA AH5515	AANMSF AANMST	-
9.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH6215L	AANA AH6215	AANMSF AANMST	-
10.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH6315L	AANA AH6315	AANMSF AANMST	-
11.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH6415L	AANA AH6415	AANMSF AANMST	-
12.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH6515L	AANA AH6515	AANMSF AANMST	-
13.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH7215L	AANA AH7215	AANMSF AANMST	-
14.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH7315L	AANA AH7315	AANMSF AANMST	-
15.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH7415L	AANA AH7415	AANMSF AANMST	-
16.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH7515L	AANA AH7515	AANMSF AANMST	-
17.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH4225L	AANA AH4225	AANMSF AANMST	-
18.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH4325L	AANA AH4325	AANMSF AANMST	-
19.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH4425L	AANA AH4425	AANMSF AANMST	-
20.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH4525L	AANA AH4525	AANMSF AANMST	-
21.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH5225L	AANA AH5225	AANMSF AANMST	-
22.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH5325L	AANA AH5325	AANMSF AANMST	-
23.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH5425L	AANA AH5425	AANMSF AANMST	-

24.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH5525L	AANA AH5525	AANMSF AANMST	-
25.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH6225L	AANA AH6225	AANMSF AANMST	-
26.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH6325L	AANA AH6325	AANMSF AANMST	-
27.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH6425L	AANA AH6425	AANMSF AANMST	-
28.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH6525L	AANA AH6525	AANMSF AANMST	-
29.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH7225L	AANA AH7225	AANMSF AANMST	-
30.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH7325L	AANA AH7325	AANMSF AANMST	-
31.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH7425L	AANA AH7425	AANMSF AANMST	-
32.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AH7525L	AANA AH7525	AANMSF AANMST	-
33.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE4215L	AANA AE4215	AANMSF AANMST	-
34.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE4315L	AANA AE4315	AANMSF AANMST	-
35.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE4415L	AANA AE4415	AANMSF AANMST	-
36.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE4515L	AANA AE4515	AANMSF AANMST	-
37.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE5215L	AANA AE5215	AANMSF AANMST	-
38.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE5315L	AANA AE5315	AANMSF AANMST	-
39.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE5415L	AANA AE5415	AANMSF AANMST	-
40.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE5515L	AANA AE5515	AANMSF AANMST	-
41.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE6215L	AANA AE6215	AANMSF AANMST	-
42.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE6315L	AANA AE6315	AANMSF AANMST	-
43.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE6415L	AANA AE6415	AANMSF AANMST	-
44.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE6515L	AANA AE6515	AANMSF AANMST	-
45.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE7215L	AANA AE7215	AANMSF AANMST	-
46.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE7315L	AANA AE7315	AANMSF AANMST	-
47.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE7415L	AANA AE7415	AANMSF AANMST	-
48.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE7515L	AANA AE7515	AANMSF AANMST	-
49.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE4225L	AANA AE4225	AANMSF AANMST	-
50.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE4325L	AANA AE4325	AANMSF AANMST	-
51.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE4425L	AANA AE4425	AANMSF AANMST	-
52.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANA AE4525L	AANA AE4525	AANMSF AANMST	-

53.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANAAE5225L	AANAAE5225	AANMSF AANMST	-
54.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANAAE5325L	AANAAE5325	AANMSF AANMST	-
55.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANAAE5425L	AANAAE5425	AANMSF AANMST	-
56.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANAAE5525L	AANAAE5525	AANMSF AANMST	-
57.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANAAE6225L	AANAAE6225	AANMSF AANMST	-
58.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANAAE6325L	AANAAE6325	AANMSF AANMST	-
59.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANAAE6425L	AANAAE6425	AANMSF AANMST	-
60.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANAAE6525L	AANAAE6525	AANMSF AANMST	-
61.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANAAE7225L	AANAAE7225	AANMSF AANMST	-
62.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANAAE7325L	AANAAE7325	AANMSF AANMST	-
63.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANAAE7425L	AANAAE7425	AANMSF AANMST	-
64.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	AANAAE7525L	AANAAE7525	AANMSF AANMST	-
65.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	MIAA3215HT	MIAA3215H	-	MIAS14
66.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	MIAA3315HT	MIAA3315H	-	MIAS14
67.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	MIAA3415HT	MIAA3415H	-	MIAS14
68.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	MIAA3215ET	MIAA3215E	-	MIAS14
69.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	MIAA3315ET	MIAA3315E	-	MIAS14
70.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	MIAA3415ET	MIAA3415E	-	MIAS14

10. Абатмент примерочный (Try-in Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)	
			Абатмент примерочный (Try-in Abutment)	Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.
1	Абатмент примерочный (Try-in Abutment)	MUTIAAR00C	MUTIAAR00	MUAAC
2	Абатмент примерочный (Try-in Abutment)	MUTIAAR17C	MUTIAAR17	MUAAC
3	Абатмент примерочный (Try-in Abutment)	MUTIAAR30C	MUTIAAR30	MUAAC

11. Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Абатмент Meg-Rhein (Meg-

			Rhein Abutment)
			в упаковке 1 шт.
1	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	ADR00	ADR00
2	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	ADR01	ADR01
3	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	ADR02	ADR02
4	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	ADR03	ADR03
5	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	ADR04	ADR04
6	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	ADR05	ADR05
7	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	ADR06	ADR06
8	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	MDR00	MDR00
9	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	MDR01	MDR01
10	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	MDR02	MDR02
11	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	MDR03	MDR03
12	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	MDR04	MDR04
13	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	MDR05	MDR05
14	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	MDR06	MDR06

12. Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)
			в упаковке 1 шт.
1	Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)	 MBAR00	MBAR00
2	Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)	MBAR10	MBAR10
3	Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)	MBAR20	MBAR20
4	Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)	MBAR30	MBAR30
5	Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)	MBAR40	MBAR40
6	Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)	MBAR50	MBAR50
7	Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)	MBAR60	MBAR60
8	Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)	MBAR70	MBAR70

13. Абатмент сканируемый (Scan Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)			
			Абатмент сканируемый (Scan Abutment)	Винт Multi Post (Multi Post Screw)	Винт абатмента (Abutment Screw)	Винт цилиндра (Cylinder Screw)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.
1	Абатмент сканируемый (Scan Abutment)	AANISR4009T	AANISR4009	SAAANMSF	-	-
2	Абатмент сканируемый (Scan Abutment)	AANISR4013T	AANISR4013	SAAANMSF	-	-
3	Абатмент сканируемый (Scan Abutment)	AOCEC4011T	AOCEC4011	-	SAIRCS200	-

4	Абатмент сканируемый (Scan Abutment)	MISS3509T	MISS3509	-	SAMIAS14	-
5	Абатмент сканируемый (Scan Abutment)	MISS3513T	MISS3513	-	SAMIAS14	-
6	Абатмент сканируемый (Scan Abutment)	AMUASR4013T	AMUASR4013	-	-	SAMUAS

14. Абатмент сканируемый Тип C (Scan Abutment C-type)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)	
			Абатмент сканируемый Тип C (Scan Abutment C-type)	Винт Multi Post (Multi Post Screw)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.
1	Абатмент сканируемый Тип C (Scan Abutment C-type)	ARICSS3405T	ARICSS3405	SAAANMSF
2	Абатмент сканируемый Тип C (Scan Abutment C-type)	ARICSS3410T	ARICSS3410	SAAANMSF
3	Абатмент сканируемый Тип C (Scan Abutment C-type)	ARICSS3420T	ARICSS3420	SAAANMSF
4	Абатмент сканируемый Тип C (Scan Abutment C-type)	ARICSS3805T	ARICSS3805	SAAANMSF
5	Абатмент сканируемый Тип C (Scan Abutment C-type)	ARICSS3810T	ARICSS3810	SAAANMSF
6	Абатмент сканируемый Тип C (Scan Abutment C-type)	ARICSS3820T	ARICSS3820	SAAANMSF
7	Абатмент сканируемый Тип C (Scan Abutment C-type)	ARICSL4505T	ARICSL4505	SAAANMSF
8	Абатмент сканируемый Тип C (Scan Abutment C-type)	ARICSL4510T	ARICSL4510	SAAANMSF
9	Абатмент сканируемый Тип C (Scan Abutment C-type)	ARICSL4520T	ARICSL4520	SAAANMSF

15. Абатмент премил (TiGen Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)			
			Абатмент премил (TiGen Abutment)	Винт Multi Post (Multi Post Screw)		Винт абатмента (Abutment Screw)
			в упаковке 10 шт.	в упаковке 10 шт.	в упаковке 3 шт.	в упаковке 13 шт.
1	Абатмент премил (TiGen Abutment)	ARTR1020.MTN	ARTR1020	AANMSF	AANMST	-
2	Абатмент премил (TiGen Abutment)	ARTR1020N.MTN	ARTR1020N	AANMSF	AANMST	-
3	Абатмент премил (TiGen Abutment)	ARTR1220.MTN	ARTR1220	AANMSF	AANMST	-
4	Абатмент премил (TiGen Abutment)	ARTR1220N.MTN	ARTR1220N	AANMSF	AANMST	-
5	Абатмент премил (TiGen Abutment)	OCTS1020.MTN	OCTS1020	-	-	IRCS200
6	Абатмент премил	NOTS1020.MTN	NOTS1020	-	-	IRCS200

	(TiGen Abutment)					
7	Абатмент премил (TiGen Abutment)	OCTS1220.MTN	OCTS1220	-	-	IRCS200
8	Абатмент премил (TiGen Abutment)	NOTS1220.MTN	NOTS1220	-	-	IRCS200
9	Абатмент премил (TiGen Abutment)	OCTR1020.MTN	OCTR1020	-	-	IRCS200
10	Абатмент премил (TiGen Abutment)	NOTR1020.MTN	NOTR1020	-	-	IRCS200
11	Абатмент премил (TiGen Abutment)	OCTR1220.MTN	OCTR1220	-	-	IRCS200
12	Абатмент премил (TiGen Abutment)	NOTR1220.MTN	NOTR1220	-	-	IRCS200
13	Абатмент премил (TiGen Abutment)	MITN1020.MTN	MITN1020	-	-	MIAS14
14	Абатмент премил (TiGen Abutment)	MITN1020N.MTN	MITN1020N	-	-	MIAS14

16. Винт-заглушка (Cover Screw)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Винт-заглушка (Cover Screw)
			в упаковке 1 шт.
1	Винт-заглушка (Cover Screw)	AANCSF3508	AANCSF3508
2	Винт-заглушка (Cover Screw)	AANCSF3516	AANCSF3516
3	Винт-заглушка (Cover Screw)	AANCSF3526	AANCSF3526
4	Винт-заглушка (Cover Screw)	MICS2505	MICS2505

17. Винт-заглушка i-Gen (i-Gen Cover Screw)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Винт-заглушка i-Gen (i-Gen Cover Screw)
			в упаковке 1 шт.
1	Винт-заглушка i-Gen (i-Gen Cover Screw)	ICS3510	ICS3510

18. Винт i-Gen (i-Gen Screw)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Винт i-Gen (i-Gen Screw)
			в упаковке 1 шт.
1	Винт i-Gen (i-Gen Screw)	IA1810	IA1810
2	Винт i-Gen (i-Gen Screw)	IA1820	IA1820
3	Винт i-Gen (i-Gen Screw)	IA1830	IA1830
4	Винт i-Gen (i-Gen Screw)	IA1840	IA1840
5	Винт i-Gen (i-Gen Screw)	IA1850	IA1850
6	Винт i-Gen (i-Gen Screw)	IA1415	IA1415
7	Винт i-Gen (i-Gen Screw)	IA1420	IA1420
8	Винт i-Gen (i-Gen Screw)	IA1430	IA1430
9	Винт i-Gen (i-Gen Screw)	IA1440	IA1440
10	Винт i-Gen (i-Gen Screw)	IA1450	IA1450

19. Винт Multi Post (Multi Post Screw)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Винт Multi Post (Multi Post Screw)
			в упаковке 1 шт.
1	Винт Multi Post (Multi Post Screw)	AANMST	AANMST
2	Винт Multi Post (Multi Post Screw)	AANMSF	AANMSF
3	Винт Multi Post (Multi Post Screw)	SAAANMSF	SAAANMSF

20. Винт абатмента (Abutment Screw)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Винт абатмента (Abutment Screw)
			в упаковке 1 шт.
1	Винт абатмента (Abutment Screw)	IRCS200	IRCS200
2	Винт абатмента (Abutment Screw)	SAIRCS200	SAIRCS200
3	Винт абатмента (Abutment Screw)	MIAS14	MIAS14
4	Винт абатмента (Abutment Screw)	SAMIAS14	SAMIAS14
5	Винт абатмента (Abutment Screw)	MIAZI410	MIAZI410

21. Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Abutment Screw)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Abutment Screw)
			в упаковке 1 шт.
1	Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Abutment Screw)	MUAARSF	MUAARSF
2	Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Abutment Screw)	MUAARST	MUAARST

22. Винт цилиндра (Cylinder Screw)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Винт цилиндра (Cylinder Screw)
			в упаковке 1 шт.
1	Винт цилиндра (Cylinder Screw)	MUAS	MUAS
2	Винт цилиндра (Cylinder Screw)	SAMUAS	SAMUAS

23. Винт S.H.A (S.H.A Screw)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Винт S.H.A (S.H.A Screw)
			в упаковке 1 шт.
1	Винт S.H.A (S.H.A Screw)	ARIHS1804	ARIHS1804
2	Винт S.H.A (S.H.A Screw)	ARIHS1805	ARIHS1805
3	Винт S.H.A (S.H.A Screw)	ARIHS1807	ARIHS1807

24. Навигационный пин (Guide Pin)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Навигационный пин (Guide Pin)
			в упаковке 1 шт.
1	Навигационный пин (Guide Pin)	MUAGP	MUAGP
2	Навигационный пин (Guide Pin)	AANGPT12H	AANGPT12H
3	Навигационный пин (Guide Pin)	AANGPT16H	AANGPT16H
4	Навигационный пин (Guide Pin)	AANGPP0010	AANGPP0010
5	Навигационный пин (Guide Pin)	AANGPP0015	AANGPP0015
6	Навигационный пин (Guide Pin)	AANGPP0020	AANGPP0020
7	Навигационный пин (Guide Pin)	AAOPGP10	AAOPGP10
8	Навигационный пин (Guide Pin)	AAOPGP12	AAOPGP12
9	Навигационный пин (Guide Pin)	AAOTGP10	AAOTGP10
10	Навигационный пин (Guide Pin)	AAOTGP12	AAOTGP12
11	Навигационный пин (Guide Pin)	MIGPT12	MIGPT12
12	Навигационный пин (Guide Pin)	MIGPT16	MIGPT16
13	Навигационный пин (Guide Pin)	MIGPP12	MIGPP12
14	Навигационный пин (Guide Pin)	MIGPP16	MIGPP16

25. Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)	
			Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)	Навигационный пин (Guide Pin)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.
1	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)	AANITN4012H	AANITN4012H	-
2	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)	AANITN4016H	AANITN4016H	-
3	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)	AANITN5012H	AANITN5012H	-
4	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)	AANITN5016H	AANITN5016H	-
5	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)	AANITH4012HT	AANITH4012	AANGPT12H
6	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)	AANITH4016HT	AANITH4016	AANGPT16H
7	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)	AANITH5012HT	AANITH5012	AANGPT12H
8	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)	AANITH5016HT	AANITH5016	AANGPT16H
9	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)	AAOITO4010T	AAOITO4010	AAOTGP10

	ложки (Impression Coring, Transfer)			
10	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coring, Transfer)	AAOITN4010T	AAOITN4010	AAOTGP10
11	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coring, Transfer)	AAOITO4012T	AAOITO4012	AAOTGP12
12	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coring, Transfer)	AAOITN4012T	AAOITN4012	AAOTGP12
13	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coring, Transfer)	AAOITO5010T	AAOITO5010	AAOTGP10
14	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coring, Transfer)	AAOITN5010T	AAOITN5010	AAOTGP10
15	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coring, Transfer)	AAOITO5012T	AAOITO5012	AAOTGP12
16	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coring, Transfer)	AAOITN5012T	AAOITN5012	AAOTGP12
17	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coring, Transfer)	MIIT3512HT	MIIT3512H	MIGPT12
18	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coring, Transfer)	MIIT3516HT	MIIT3516H	MIGPT16

26. Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coring, Pick-up)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)	
			Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coring, Pick-up)	Навигационный пин (Guide Pin)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.
1	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coring, Pick-up)	AANIPH4007T	AANIPH4007	AANGPP0010
2	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coring, Pick-up)	AANIPN4007T	AANIPN4007	AANGPP0010
3	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coring, Pick-up)	AANIPH4012T	AANIPH4012	AANGPP0015
4	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coring, Pick-up)	AANIPN4012T	AANIPN4012	AANGPP0015
5	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coring, Pick-up)	AANIPH4016T	AANIPH4016	AANGPP0020
6	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coring, Pick-up)	AANIPN4016T	AANIPN4016	AANGPP0020
7	Трансфер слепочный для	AANIPH5007T	AANIPH5007	AANGPP0010

	открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)			
8	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AANIPN5007T	AANIPN5007	AANGPP0010
9	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AANIPH5012T	AANIPH5012	AANGPP0015
10	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AANIPN5012T	AANIPN5012	AANGPP0015
11	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AANIPH6007T	AANIPH6007	AANGPP0010
12	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AANIPH6012T	AANIPH6012	AANGPP0015
13	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AANIPN6007T	AANIPN6007	AANGPP0015
14	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AANIPN6012T	AANIPN6012	AANGPP0015
15	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AANIPH7007T	AANIPH7007	AANGPP0010
16	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AANIPH7012T	AANIPH7012	AANGPP0015
17	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AANIPN7007T	AANIPN7007	AANGPP0010
18	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AANIPN7012T	AANIPN7012	AANGPP0015
19	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AAOIPN4010T	AAOIPN4010	AAOPGP10
20	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AAOIPN4010T	AAOIPN4010	AAOPGP10
21	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AAOIPN4012T	AAOIPN4012	AAOPGP12
22	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AAOIPN4012T	AAOIPN4012	AAOPGP12
23	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AAOIPN5010T	AAOIPN5010	AAOPGP10
24	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AAOIPN5010T	AAOIPN5010	AAOPGP10
25	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AAOIPN5012T	AAOIPN5012	AAOPGP12
26	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coving, Pick-up)	AAOIPN5012T	AAOIPN5012	AAOPGP12

27	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coping, Pick-up)	MUAICT	MUAJC	MUAGP
28	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coping, Pick-up)	MIIP3512HT	MIIP3512H	MIGPP12
29	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coping, Pick-up)	MIIP3516HT	MIIP3516H	MIGPP16

27. Трансфер слепочный металлический (Stainless Impression Coping)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Трансфер слепочный металлический (Stainless Impression Coping)
			в упаковке 2 шт.
1	Трансфер слепочный металлический (Stainless Impression Coping)	044CAIN	044CAIN

28. Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)
			в упаковке 1 шт.
1	Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)	AANSIF440	AANSIF440
2	Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)	AANSIF455	AANSIF455
3	Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)	AANSIF470	AANSIF470
4	Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)	AANSIF540	AANSIF540
5	Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)	AANSIF555	AANSIF555
6	Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)	AANSIF570	AANSIF570
7	Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)	AANSIF640	AANSIF640
8	Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)	AANSIF655	AANSIF655
9	Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)	AANSIF670	AANSIF670
10	Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)	AANSIF740	AANSIF740
11	Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)	AANSIF755	AANSIF755
12	Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)	AANSIF770	AANSIF770

29. Аналог лабораторный (Lab Analog)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Аналог лабораторный (Lab Analog)
			в упаковке 1 шт.

1	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANLAF35	AANLAF35
2	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANLAF4055	AANLAF4055
3	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AALLAF6080	AALLAF6080
4	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANSLF440	AANSLF440
5	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANSLF455	AANSLF455
6	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANSLF470	AANSLF470
7	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANSLF540	AANSLF540
8	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANSLF555	AANSLF555
9	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANSLF570	AANSLF570
10	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANSLF640	AANSLF640
11	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANSLF655	AANSLF655
12	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANSLF670	AANSLF670
13	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANSLF740	AANSLF740
14	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANSLF755	AANSLF755
15	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANSLF770	AANSLF770
16	Аналог лабораторный (Lab Analog)	AANOLA4000	AANOLA4000
17	Аналог лабораторный (Lab Analog)	IOA300	IOA300
18	Аналог лабораторный (Lab Analog)	MUALA	MUALA
19	Аналог лабораторный (Lab Analog)	PLA	PLA
20	Аналог лабораторный (Lab Analog)	MILA300H	MILA300H

30. Аналог RP (RP Analog)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Аналог RP (RP Analog)
			в упаковке 1 шт.
1	Аналог RP (RP Analog)	CANIAR4009	CANIAR4009
2	Аналог RP (RP Analog)	OCTARA4	OCTARA4
3	Аналог RP (RP Analog)	OCTARA5	OCTARA5
4	Аналог RP (RP Analog)	CMIIAN3009	CMIIAN3009

31. Цилиндр временный (Temporary Cylinder)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)		
			Цилиндр временный (Temporary Cylinder)	Винт абатмента (Abutment Screw)	Винт цилиндра (Cylinder Screw)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.	в упаковке 2 шт.
1	Цилиндр временный (Temporary Cylinder)	AANOTCO4010T	AANOTCO4010	IRCS200	-
2	Цилиндр временный (Temporary Cylinder)	AANOTCO5010T	AANOTCO5010	IRCS200	-
3	Цилиндр временный (Temporary Cylinder)	AANOTCN4010T	AANOTCN4010	IRCS200	-
4	Цилиндр временный (Temporary Cylinder)	AANOTCN5010T	AANOTCN5010	IRCS200	-
5	Цилиндр временный (Temporary Cylinder)	MUATCL	MUATC	-	MUAS

32. Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)
			в упаковке 1 шт.
1	Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)	AANBCB470	AANBCB470
2	Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)	AANBCB570	AANBCB570
3	Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)	AANBCB670	AANBCB670
4	Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)	AANBCB770	AANBCB770
5	Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)	AANBCS470	AANBCS470
6	Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)	AANBCS570	AANBCS570
7	Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)	AANBCS670	AANBCS670
8	Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)	AANBCS770	AANBCS770

33. Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)	
			Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder)	Винт абатмента (Abutment Screw)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.
1	Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder)	AAOECO4005T	AAOECO4005	IRCS200
2	Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder)	AAOECO4007T	AAOECO4007	IRCS200
3	Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder)	AAOECO5005T	AAOECO5005	IRCS200
4	Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder)	AAOECO5007T	AAOECO5007	IRCS200
5	Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder)	AAOECN4005T	AAOECN4005	IRCS200
6	Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder)	AAOECN4007T	AAOECN4007	IRCS200
7	Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder)	AAOECN5005T	AAOECN5005	IRCS200
8	Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder)	AAOECN5007T	AAOECN5007	IRCS200

34. Цилиндр CCM (CCM Cylinder)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)		
			Цилиндр CCM (CCM Cylinder)	Винт абатмента (Abutment Screw)	Винт цилиндра (Cylinder Screw)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.	в упаковке 2 шт.
1	Цилиндр CCM (CCM Cylinder)	AANCCO4000T	AANCCO4000	IRCS200	-
2	Цилиндр CCM (CCM Cylinder)	AANCCN4000T	AANCCN4000	IRCS200	-
3	Цилиндр CCM (CCM Cylinder)	AANCCO5000T	AANCCO5000	IRCS200	-
4	Цилиндр CCM (CCM Cylinder)	AANCCN5000T	AANCCN5000	IRCS200	-
5	Цилиндр CCM (CCM Cylinder)	MUACCML	MUACCM	-	MUAS

35. Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)	
			Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder)	Винт абатмента (Abutment Screw)

			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.
1	Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder)	AAOTCO4010T	AAOTCO4010	IRCS200
2	Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder)	IOPH100T	IOPH100	IRCS200
3	Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder)	AAOTCN4010T	AAOTCN4010	IRCS200
4	Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder)	IOPN100T	IOPN100	IRCS200

36. Колпачок защитный (Comfort Cap)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Колпачок защитный (Comfort Cap)
			в упаковке 1 шт.
1	Колпачок защитный (Comfort Cap)	AANCCF440	AANCCF440
2	Колпачок защитный (Comfort Cap)	AANCCF455	AANCCF455
3	Колпачок защитный (Comfort Cap)	AANCCF470	AANCCF470
4	Колпачок защитный (Comfort Cap)	AANCCF540	AANCCF540
5	Колпачок защитный (Comfort Cap)	AANCCF555	AANCCF555
6	Колпачок защитный (Comfort Cap)	AANCCF570	AANCCF570
7	Колпачок защитный (Comfort Cap)	AANCCF640	AANCCF640
8	Колпачок защитный (Comfort Cap)	AANCCF655	AANCCF655
9	Колпачок защитный (Comfort Cap)	AANCCF670	AANCCF670
10	Колпачок защитный (Comfort Cap)	AANCCF740	AANCCF740
11	Колпачок защитный (Comfort Cap)	AANCCF755	AANCCF755
12	Колпачок защитный (Comfort Cap)	AANCCF770	AANCCF770

37. Колпачок предохраняющий (Healing Cap)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)		
			Колпачок предохраняющий (Healing Cap)	Винт абатмента (Abutment Screw)	Винт цилиндра (Cylinder Screw)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.	в упаковке 2 шт.
1	Колпачок предохраняющий (Healing Cap)	AANOHC4000T	AANOHC4000	IRCS200	-
2	Колпачок предохраняющий (Healing Cap)	IHC400T	IHC400	IRCS200	-
3	Колпачок предохраняющий (Healing Cap)	MUAHCL	MUAHC	-	MUAS
4	Колпачок предохраняющий (Healing Cap)	MUAHCWL	MUAHCW	-	MUAS

38. Скан пост (Scan Post)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Скан пост (Scan Post)
			в упаковке 10 шт.
1	Скан пост (Scan Post)	SP4007.MTN	SP4007
2	Скан пост (Scan Post)	SP5007.MTN	SP5007
3	Скан пост (Scan Post)	SP6007.MTN	SP6007
4	Скан пост (Scan Post)	SP7007.MTN	SP7007

39. Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap)
			в упаковке 1 шт.
1	Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap)	AFCP	AFCP
2	Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap)	AFCA15	AFCA15
3	Колпачок абатмента предохраняющего (Fuse Cap)	AFCA25	AFCA25

40. Металлическая матрица с ретенционным кольцом (Metal Housing)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Металлическая матрица с ретенционным кольцом (Metal Housing)
			в упаковке 1 шт.
1	Металлическая матрица с ретенционным кольцом (Metal Housing)	MBHR	MBHR

41. Ретенционное кольцо (Retentive Ring)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)	
			Ретенционное кольцо (Retentive Ring)	
			в упаковке 5 шт.	в упаковке 10 шт.
1	Ретенционное кольцо (Retentive Ring)	MBR5	MBR	-
2	Ретенционное кольцо (Retentive Ring)	MBR10	-	MBR

42. Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)
			в упаковке 5 шт.
1	Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)	MHP	MHP
2	Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)	THP	THP

43. Колпачок ретенционный (Retentive Cap)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Колпачок ретенционный (Retentive Cap)
			в упаковке 5 шт.
1	Колпачок ретенционный (Retentive Cap)	RCWP	RCWP
2	Колпачок ретенционный (Retentive Cap)	RCVP	RCVP
3	Колпачок ретенционный (Retentive Cap)	RCPP	RCPP
4	Колпачок ретенционный (Retentive Cap)	RCYP	RCYP
5	Колпачок ретенционный (Retentive Cap)	RCBP	RCBP

10.4.2. Формирователь десны (Healing Abutment)

1. Формирователь десны (Healing Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Формирователь десны (Healing Abutment)
			в упаковке 1 шт.
1.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0403	AANHAF0403
2.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0404	AANHAF0404
3.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0405	AANHAF0405
4.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0406	AANHAF0406
5.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0407	AANHAF0407
6.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0408	AANHAF0408
7.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0409	AANHAF0409
8.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0503	AANHAF0503
9.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0504	AANHAF0504
10.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0505	AANHAF0505
11.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0506	AANHAF0506
12.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0507	AANHAF0507
13.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0508	AANHAF0508
14.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0509	AANHAF0509
15.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0603	AANHAF0603
16.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0604	AANHAF0604
17.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0605	AANHAF0605
18.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0606	AANHAF0606
19.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0607	AANHAF0607
20.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0608	AANHAF0608
21.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0609	AANHAF0609
22.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0703	AANHAF0703
23.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0704	AANHAF0704
24.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0705	AANHAF0705
25.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0706	AANHAF0706
26.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0707	AANHAF0707
27.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0708	AANHAF0708

28.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0709	AANHAF0709
29.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0803	AANHAF0803
30.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0804	AANHAF0804
31.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0805	AANHAF0805
32.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0806	AANHAF0806
33.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0807	AANHAF0807
34.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0808	AANHAF0808
35.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF0809	AANHAF0809
36.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF1003	AANHAF1003
37.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF1004	AANHAF1004
38.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF1005	AANHAF1005
39.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF1006	AANHAF1006
40.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF1007	AANHAF1007
41.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF1008	AANHAF1008
42.	Формирователь десны (Healing Abutment)	AANHAF1009	AANHAF1009
43.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3025	MIHA3025
44.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3030	MIHA3030
45.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3040	MIHA3040
46.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3050	MIHA3050
47.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3060	MIHA3060
48.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3070	MIHA3070
49.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3080	MIHA3080
50.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3090	MIHA3090
51.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3525	MIHA3525
52.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3530	MIHA3530
53.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3540	MIHA3540
54.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3550	MIHA3550
55.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3560	MIHA3560
56.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3570	MIHA3570
57.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3580	MIHA3580
58.	Формирователь десны (Healing Abutment)	MIHA3590	MIHA3590

2. Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)	
			Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment) в упаковке 1 шт.	Винт S.H.A (S.H.A Screw) в упаковке 1 шт.
1	Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)	ARISH4004T	ARISH4004	ARIHS1804
2	Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)	ARISH4005T	ARISH4005	ARIHS1805
3	Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)	ARISH4007T	ARISH4007	ARIHS1807
4	Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)	ARISH5004T	ARISH5004	ARIHS1804
5	Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)	ARISH5005T	ARISH5005	ARIHS1805

6	Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)	ARISH5007T	ARISH5007	ARIHS1807
7	Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)	ARISH6004T	ARISH6004	ARIHS1804
8	Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)	ARISH6005T	ARISH6005	ARIHS1805
9	Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)	ARISH6007T	ARISH6007	ARIHS1807
10	Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)	ARISH7004T	ARISH7004	ARIHS1804
11	Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)	ARISH7005T	ARISH7005	ARIHS1805
12	Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)	ARISH7007T	ARISH7007	ARIHS1807

3. Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment)
			в упаковке 1 шт.
1	Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment)	FHA402	FHA402
2	Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment)	FHA403	FHA403
3	Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment)	FHA404	FHA404

10.4.3. Титановое основание (ZrGen Abutment)

1. Титановое основание (ZrGen Abutment)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)				
			Титановое основание (ZrGen Abutment)	Винт Multi Post (Multi Post Screw)		Винт абатмента (Abutment Screw)	Винт цилиндра (Cylinder Screw)
			в уп-ке 10 шт.	в уп-ке 10 шт.	в уп-ке 3 шт.	в уп-ке 13 шт.	в уп-ке 13 шт.
1	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 15.MTN	AANIPR4015	AANMSF	AANMST	-	-
2	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 16.MTN	AANIPR4016	AANMSF	AANMST	-	-
3	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 18.MTN	AANIPR4018	AANMSF	AANMST	-	-
4	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 25.MTN	AANIPR4025	AANMSF	AANMST	-	-
5	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 26.MTN	AANIPR4026	AANMSF	AANMST	-	-

6	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 28.MTN	AANIPR4028	AANMSF	AANMST	-	-
7	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 35.MTN	AANIPR4035	AANMSF	AANMST	-	-
8	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 36.MTN	AANIPR4036	AANMSF	AANMST	-	-
9	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 38.MTN	AANIPR4038	AANMSF	AANMST	-	-
10	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 45.MTN	AANIPR4045	AANMSF	AANMST	-	-
11	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 46.MTN	AANIPR4046	AANMSF	AANMST	-	-
12	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 48.MTN	AANIPR4048	AANMSF	AANMST	-	-
13	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 15N.MTN	AANIPR4015N	AANMSF	AANMST	-	-
14	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 16N.MTN	AANIPR4016N	AANMSF	AANMST	-	-
15	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 18N.MTN	AANIPR4018N	AANMSF	AANMST	-	-
16	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 25N.MTN	AANIPR4025N	AANMSF	AANMST	-	-
17	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 26N.MTN	AANIPR4026N	AANMSF	AANMST	-	-
18	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 28N.MTN	AANIPR4028N	AANMSF	AANMST	-	-
19	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 35N.MTN	AANIPR4035N	AANMSF	AANMST	-	-
20	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 36N.MTN	AANIPR4036N	AANMSF	AANMST	-	-
21	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 38N.MTN	AANIPR4038N	AANMSF	AANMST	-	-
22	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 45N.MTN	AANIPR4045N	AANMSF	AANMST	-	-
23	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 46N.MTN	AANIPR4046N	AANMSF	AANMST	-	-
24	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR40 48N.MTN	AANIPR4048N	AANMSF	AANMST	-	-
25	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 15.MTN	AANIPR4515	AANMSF	AANMST	-	-

	Abutment)						
26	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 16.MTN	AANIPR4516	AANMSF	AANMST	-	-
27	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 18.MTN	AANIPR4518	AANMSF	AANMST	-	-
28	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 25.MTN	AANIPR4525	AANMSF	AANMST	-	-
29	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 26.MTN	AANIPR4526	AANMSF	AANMST	-	-
30	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 28.MTN	AANIPR4528	AANMSF	AANMST	-	-
31	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 35.MTN	AANIPR4535	AANMSF	AANMST	-	-
32	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 36.MTN	AANIPR4536	AANMSF	AANMST	-	-
33	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 38.MTN	AANIPR4538	AANMSF	AANMST	-	-
34	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 45.MTN	AANIPR4545	AANMSF	AANMST	-	-
35	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 46.MTN	AANIPR4546	AANMSF	AANMST	-	-
36	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 48.MTN	AANIPR4548	AANMSF	AANMST	-	-
37	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 15N.MTN	AANIPR4515N	AANMSF	AANMST	-	-
38	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 16N.MTN	AANIPR4516N	AANMSF	AANMST	-	-
39	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 18N.MTN	AANIPR4518N	AANMSF	AANMST	-	-
40	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 25N.MTN	AANIPR4525N	AANMSF	AANMST	-	-
41	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 26N.MTN	AANIPR4526N	AANMSF	AANMST	-	-
42	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 28N.MTN	AANIPR4528N	AANMSF	AANMST	-	-
43	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 35N.MTN	AANIPR4535N	AANMSF	AANMST	-	-
44	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 36N.MTN	AANIPR4536N	AANMSF	AANMST	-	-

45	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 38N.MTN	AANIPR4538N	AANMSF	AANMST	-	-
46	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 45N.MTN	AANIPR4545N	AANMSF	AANMST	-	-
47	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 46N.MTN	AANIPR4546N	AANMSF	AANMST	-	-
48	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AANIPR45 48N.MTN	AANIPR4548N	AANMSF	AANMST	-	-
49	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AOCEPS50 15.MTN	AOCEPS5015	-	-	IRCS200	-
50	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AOCEPS50 16.MTN	AOCEPS5016	-	-	IRCS200	-
51	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AOCEPS50 18.MTN	AOCEPS5018	-	-	IRCS200	-
52	Титановое основание (ZrGen Abutment)	ANOEPS5 015.MTN	ANOEPS5015	-	-	IRCS200	-
53	Титановое основание (ZrGen Abutment)	ANOEPS5 016.MTN	ANOEPS5016	-	-	IRCS200	-
54	Титановое основание (ZrGen Abutment)	ANOEPS5 018.MTN	ANOEPS5018	-	-	IRCS200	-
55	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AOCEPR5 515.MTN	AOCEPR5515	-	-	IRCS200	-
56	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AOCEPR5 516.MTN	AOCEPR5516	-	-	IRCS200	-
57	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AOCEPR5 518.MTN	AOCEPR5518	-	-	IRCS200	-
58	Титановое основание (ZrGen Abutment)	ANOEPR5 515.MTN	ANOEPR5515	-	-	IRCS200	-
59	Титановое основание (ZrGen Abutment)	ANOEPR5 516.MTN	ANOEPR5516	-	-	IRCS200	-
60	Титановое основание (ZrGen Abutment)	ANOEPR5 518.MTN	ANOEPR5518	-	-	IRCS200	-
61	Титановое основание (ZrGen Abutment)	MIPN3013.MTN	MIPN3013	-	-	MIAZ1410	-
62	Титановое основание (ZrGen Abutment)	MIPN3013 N.MTN	MIPN3013N	-	-	MIAZ1410	-
63	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AMUAPR5 515N.MTN	AMUAPR5515 N	-	-	-	MUAS
64	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AMUAPR5 516N.MTN	AMUAPR5516 N	-	-	-	MUAS

	Abutment)						
65	Титановое основание (ZrGen Abutment)	AMUAPR5518N.MTN	AMUAPR5518N	-	-	-	MUAS

2. Титановое основание Тип C (ZrGen Abutment C-Type)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)		
			Титановое основание Тип C (ZrGen Abutment C-Type)	Винт Multi Post (Multi Post Screw)	
			в упаковке 10 шт.	в упаковке 10 шт.	в упаковке 3 шт.
1	Титановое основание Тип C (ZrGen Abutment C-Type)	ARCS3405.MTN	ARCS3405	AANMSF	AANMST
2	Титановое основание Тип C (ZrGen Abutment C-Type)	ARCS3410.MTN	ARCS3410	AANMSF	AANMST
3	Титановое основание Тип C (ZrGen Abutment C-Type)	ARCS3420.MTN	ARCS3420	AANMSF	AANMST
4	Титановое основание Тип C (ZrGen Abutment C-Type)	ARCS3805.MTN	ARCS3805	AANMSF	AANMST
5	Титановое основание Тип C (ZrGen Abutment C-Type)	ARCS3810.MTN	ARCS3810	AANMSF	AANMST
6	Титановое основание Тип C (ZrGen Abutment C-Type)	ARCS3820.MTN	ARCS3820	AANMSF	AANMST
7	Титановое основание Тип C (ZrGen Abutment C-Type)	ARCL4505.MTN	ARCL4505	AANMSF	AANMST
8	Титановое основание Тип C (ZrGen Abutment C-Type)	ARCL4510.MTN	ARCL4510	AANMSF	AANMST
9	Титановое основание Тип C (ZrGen Abutment C-Type)	ARCL4520.MTN	ARCL4520	AANMSF	AANMST

10.4.4. Набор Meg-Ball для съемного протезирования (Meg-Ball Package)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)		
			Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)	Металлическая матрица с ретенционным кольцом (Metal Housing)	Позиционер матрицы (Housing Positioner)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.	в упаковке 4 шт.
1	Набор Meg-Ball для съемного протезирования (Meg-Ball Package)	MBAR00P	MBAR00	MBHR	MBP00 MBP05 MBP10 MBP15
2	Набор Meg-Ball для съемного протезирования (Meg-Ball Package)	MBAR10P	MBAR10	MBHR	MBP00 MBP05 MBP10 MBP15
3	Набор Meg-Ball для съемного протезирования (Meg-Ball Package)	MBAR20P	MBAR20	MBHR	MBP00 MBP05 MBP10 MBP15
4	Набор Meg-Ball для	MBAR30P	MBAR30	MBHR	MBP00

	съемного протезирования (Meg-Ball Package)				MBP05 MBP10 MBP15
5	Набор Meg-Ball для съемного протезирования (Meg-Ball Package)	MBAR40P	MBAR40	MBHR	MBP00 MBP05 MBP10 MBP15
6	Набор Meg-Ball для съемного протезирования (Meg-Ball Package)	MBAR50P	MBAR50	MBHR	MBP00 MBP05 MBP10 MBP15
7	Набор Meg-Ball для съемного протезирования (Meg-Ball Package)	MBAR60P	MBAR60	MBHR	MBP00 MBP05 MBP10 MBP15
8	Набор Meg-Ball для съемного протезирования (Meg-Ball Package)	MBAR70P	MBAR70	MBHR	MBP00 MBP05 MBP10 MBP15

10.4.5. Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)				
			Абатмент Meg-Rhein (Abutment Meg-Rhein)	Колпачок ретенционный (Retentive Cap)	Трансфер слепочный пластиковый (Plastic Impression Coping)	Матрица металлическая (Stainless Steel Housing)	Диск защитный (Protective Disk)
			в уп-ке 1 шт.	в уп-ке 5 шт.	в уп-ке 1 шт.	в уп-ке 1 шт.	в уп-ке 1 шт.
1.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	ADR00P	ADR00	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	MHP	PD1515
2.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	ADR01P	ADR01	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	MHP	PD1515
3.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	ADR02P	ADR02	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	MHP	PD1515
4.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	ADR03P	ADR03	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	MHP	PD1515

5.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	ADR04P	ADR04	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	MHP	PD1515
6.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	ADR05P	ADR05	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	MHP	PD1515
7.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	ADR06P	ADR06	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	MHP	PD1515
8.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	ADR00PA	ADR00	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	THP	PD1515
9.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	ADR01PA	ADR01	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	THP	PD1515
10.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	ADR02PA	ADR02	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	THP	PD1515
11.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	ADR03PA	ADR03	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	THP	PD1515
12.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	ADR04PA	ADR04	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	THP	PD1515
13.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования	ADR05PA	ADR05	RCWP RCVP RCPP RCYP	PIC	THP	PD1515

	(Meg-Rhein Overdenture System)			RCBP			
14.	Набор Meg-Rhein для съёмного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	ADR06PA	ADR06	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	THP	PD1515
15.	Набор Meg-Rhein для съёмного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	MDR00P	MDR00	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	MHP	PD1515
16.	Набор Meg-Rhein для съёмного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	MDR01P	MDR01	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	MHP	PD1515
17.	Набор Meg-Rhein для съёмного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	MDR02P	MDR02	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	MHP	PD1515
18.	Набор Meg-Rhein для съёмного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	MDR03P	MDR03	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	MHP	PD1515
19.	Набор Meg-Rhein для съёмного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	MDR04P	MDR04	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	MHP	PD1515
20.	Набор Meg-Rhein для съёмного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	MDR05P	MDR05	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	MHP	PD1515
21.	Набор Meg-Rhein для съёмного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	MDR06P	MDR06	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	MHP	PD1515
22.	Набор Meg-	MDR00PA	MDR00	RCWP	PIC	THP	PD1515

	Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)			RCVP RCPP RCYP RCBP			
23.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	MDR01PA	MDR01	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	THP	PD1515
24.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	MDR02PA	MDR02	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	THP	PD1515
25.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	MDR03PA	MDR03	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	THP	PD1515
26.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	MDR04PA	MDR04	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	THP	PD1515
27.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	MDR05PA	MDR05	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	THP	PD1515
28.	Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System)	MDR06PA	MDR06	RCWP RCVP RCPP RCYP RCBP	PIC	THP	PD1515

10.4.6. Инструменты стоматологические (Dental Instruments):

1. Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикула)	Структура (Название модели)
			Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)
			в упаковке 1 шт.
1	Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)	MUAAC	MUAAC

2	Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier)	MUASC	MUASC
---	---	-------	-------

2. Отвертка Multi-unit (Multi-unit Driver)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Отвертка Multi-unit (Multi-unit Driver)
			в упаковке 1 шт.
1	Отвертка Multi-unit (Multi-unit Driver)	MUD10	MUD10
2	Отвертка Multi-unit (Multi-unit Driver)	TCMMUDS20	TCMMUDS20
3	Отвертка Multi-unit (Multi-unit Driver)	TCMMUDL20	TCMMUDL20

3. Отвертка для извлечения Multi-unit (Multi-unit Removal Driver)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Отвертка для извлечения Multi-unit (Multi-unit Removal Driver)
			в упаковке 1 шт.
1	Отвертка для извлечения Multi-unit (Multi-unit Removal Driver)	MUARD20	MUARD20

4. Отвертка ручная (Hand Driver)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Отвертка ручная (Hand Driver)
			в упаковке 1 шт.
1	Отвертка ручная (Hand Driver)	MUHD1220	MUHD1220
2	Отвертка ручная (Hand Driver)	TCMHDS1600	TCMHDS1600
3	Отвертка ручная (Hand Driver)	TCMHDU1200	TCMHDU1200
4	Отвертка ручная (Hand Driver)	TCMHDS1200	TCMHDS1200
5	Отвертка ручная (Hand Driver)	TCMHDL1200	TCMHDL1200
6	Отвертка ручная (Hand Driver)	TCMHDE1200	TCMHDE1200

5. Отвертка машинная Multi-unit (Right angle Driver Multi-unit)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Отвертка машинная Multi-unit (Right angle Driver Multi-unit)
			в упаковке 1 шт.
1	Отвертка машинная Multi-unit (Right angle Driver Multi-unit)	MURAD10	MURAD10

6. Отвертка для слепочного трансфера (Impression Driver)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Отвертка для слепочного трансфера (Impression Driver)
			в упаковке 1 шт.

1	Отвертка для слепочного трансфера (Impression Driver)	TCMID	TCMID
2	Отвертка для слепочного трансфера (Impression Driver)	TCMIDE	TCMIDE

7. Отвертка для извлечения абатмента (Abutment Removal Driver)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Отвертка для извлечения абатмента (Abutment Removal Driver)
			в упаковке 1 шт.
1	Отвертка для извлечения абатмента (Abutment Removal Driver)	TANMRD18	TANMRD18
2	Отвертка для извлечения абатмента (Abutment Removal Driver)	TANMRD25	TANMRD25

8. Отвертка Octa (Octa Driver)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Отвертка Octa (Octa Driver)
			в упаковке 1 шт.
1	Отвертка Octa (Octa Driver)	MOD300S	MOD300S
2	Отвертка Octa (Octa Driver)	MOD300L	MOD300L

9. Отвертка для углового наконечника (Right Angle Driver)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Отвертка для углового наконечника (Right Angle Driver)
			в упаковке 1 шт.
1	Отвертка для углового наконечника (Right Angle Driver)	MDR120SS	MDR120SS
2	Отвертка для углового наконечника (Right Angle Driver)	MDR120S	MDR120S
3	Отвертка для углового наконечника (Right Angle Driver)	MDR120L	MDR120L
4	Отвертка для углового наконечника (Right Angle Driver)	MDR120EL	MDR120EL

10. Отвертка установочная (Insert Driver)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Отвертка установочная (Insert Driver)
			в упаковке 1 шт.
1	Отвертка установочная (Insert Driver)	MID120S	MID120S
2	Отвертка установочная (Insert Driver)	MID120L	MID120L

11. Отвертка для установки ретенционного колпачка (Retentive Cap Insertion Tool)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Отвертка для установки ретенционного колпачка (Retentive Cap Insertion Tool)
			в упаковке 1 шт.
1	Отвертка для установки ретенционного колпачка (Retentive Cap Insertion Tool)	0851AC	0851AC

12. Сверло копьевидное (Lance Drill)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Сверло копьевидное (Lance Drill)
			в упаковке 1 шт.
1	Сверло копьевидное (Lance Drill)	MGD100L	MGD100L
2	Сверло копьевидное (Lance Drill)	LD1618S	LD1618S
3	Сверло копьевидное (Lance Drill)	LD1618M	LD1618M
4	Сверло копьевидное (Lance Drill)	LD1618L	LD1618L
5	Сверло копьевидное (Lance Drill)	LD2015	LD2015
6	Сверло копьевидное (Lance Drill)	LD2025	LD2025
7	Сверло копьевидное (Lance Drill)	LD2030	LD2030

13. Фреза маркировочная (Marking Drill)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Фреза маркировочная (Marking Drill)
			в упаковке 1 шт.
1	Фреза маркировочная (Marking Drill)	TANTDF2018	TANTDF2018
2	Фреза маркировочная (Marking Drill)	TANSDF3318	TANSDF3318
3	Фреза маркировочная (Marking Drill)	TANSDF3818	TANSDF3818
4	Фреза маркировочная (Marking Drill)	TANSDF4318	TANSDF4318
5	Фреза маркировочная (Marking Drill)	TANSDF4815	TANSDF4815
6	Фреза маркировочная (Marking Drill)	TANSDF5415	TANSDF5415
7	Фреза маркировочная (Marking Drill)	TANSDF5915	TANSDF5915

14. Фреза формирующая (Shaping Drill)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Фреза формирующая (Shaping Drill)
			в упаковке 1 шт.
1	Фреза формирующая (Shaping Drill)	SD2818S	SD2818S
2	Фреза формирующая (Shaping Drill)	SD2518M	SD2518M
3	Фреза формирующая (Shaping Drill)	SD2518L	SD2518L
4	Фреза формирующая (Shaping Drill)	SD2518S	SD2518S
5	Фреза формирующая (Shaping Drill)	SD2818M	SD2818M
6	Фреза формирующая (Shaping Drill)	SD2818L	SD2818L

15. Фреза со стоппером (Stopper Drill)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Фреза со стоппером (Stopper Drill)
			в упаковке 1 шт.
1	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANTDF2007	TANTDF2007
2	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANTDF2008	TANTDF2008
3	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANTDF2010	TANTDF2010
4	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANTDF2011	TANTDF2011
5	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	SD2807M	SD2807M
6	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	SD2808M	SD2808M
7	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	SD2810M	SD2810M
8	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	SD2811M	SD2811M
9	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF3307	TANSDF3307
10	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF3308	TANSDF3308
11	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF3310	TANSDF3310
12	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF3311	TANSDF3311
13	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF3807	TANSDF3807
14	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF3808	TANSDF3808
15	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF3810	TANSDF3810
16	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF3811	TANSDF3811
17	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF4307	TANSDF4307
18	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF4308	TANSDF4308
19	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF4310	TANSDF4310
20	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF4311	TANSDF4311
21	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF4807	TANSDF4807
22	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF4808	TANSDF4808
23	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF4810	TANSDF4810
24	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	TANSDF4811	TANSDF4811

16. Трепан с центральным пином (Point Trephine Bur)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Трепан с центральным пином (Point Trephine Bur)
			в упаковке 1 шт.
1	Трепан с центральным пином (Point Trephine Bur)	SPTB4050	SPTB4050

17. Фреза кортикальная (Cortical Bone Drill)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Фреза кортикальная (Cortical Bone Drill)
			в упаковке 1 шт.

1	Фреза кортикальная (Cortical Bone Drill)	TANCDL3500	TANCDL3500
2	Фреза кортикальная (Cortical Bone Drill)	TANCDL4055	TANCDL4055
3	Фреза кортикальная (Cortical Bone Drill)	TANCDL6080	TANCDL6080

18. Бур трепанационный (Trephine Bur)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Бур трепанационный (Trephine Bur)
			в упаковке 1 шт.
1	Бур трепанационный (Trephine Bur)	TANTBL2535	TANTBL2535
2	Бур трепанационный (Trephine Bur)	TANTBL4050	TANTBL4050
3	Бур трепанационный (Trephine Bur)	TANTBL5060	TANTBL5060
4	Бур трепанационный (Trephine Bur)	TANTBL6070	TANTBL6070
5	Бур трепанационный (Trephine Bur)	TANTBE2535	TANTBE2535
6	Бур трепанационный (Trephine Bur)	TANTBE4050	TANTBE4050
7	Бур трепанационный (Trephine Bur)	TANTBE5060	TANTBE5060
8	Бур трепанационный (Trephine Bur)	TANTBE6070	TANTBE6070

19. Профилировщик кости (Bone Profiler)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)	
			Профилировщик кости (Bone Profiler)	Навигационный пин для профилировщика кости (Bone Profiler Guide Pin)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.
1	Профилировщик кости (Bone Profiler)	TANBPL40G	TANBPL40	TANPGF3305
2	Профилировщик кости (Bone Profiler)	TANBPL50G	TANBPL50	TANPGF3305
3	Профилировщик кости (Bone Profiler)	TANBPS60G	TANBPS60	TANPGF3305
4	Профилировщик кости (Bone Profiler)	TANBPS70G	TANBPS70	TANPGF3305

20. Сверло Линдемманна (Lindermann Drill)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Сверло Линдемманна (Lindermann Drill)
			в упаковке 1 шт.
1	Сверло Линдемманна (Lindermann Drill)	TEEL200M	TEEL200M

21. Фреза выравнивающая (Flattening Drill)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Фреза выравнивающая (Flattening Drill)
			в упаковке 1 шт.
1	Фреза выравнивающая (Flattening Drill)	FD5020	FD5020

2	Фреза выравнивающая (Flattening Drill)	FD6020	FD6020
---	--	--------	--------

22. Перфоратор слизистой оболочки (Tissue Punch)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Перфоратор слизистой оболочки (Tissue Punch)
			в упаковке 1 шт.
1	Перфоратор слизистой оболочки (Tissue Punch)	TCMTPM0304	TCMTPM0304
2	Перфоратор слизистой оболочки (Tissue Punch)	TCMTPM0405	TCMTPM0405
3	Перфоратор слизистой оболочки (Tissue Punch)	TCMTPM0506	TCMTPM0506
4	Перфоратор слизистой оболочки (Tissue Punch)	TCMTPM0607	TCMTPM0607
5	Перфоратор слизистой оболочки (Tissue Punch)	TCMTPM0708	TCMTPM0708

23. Триммер лунки (Hole Trimmer)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Триммер лунки (Hole Trimmer)
			в упаковке 1 шт.
1	Триммер лунки (Hole Trimmer)	AGHTN2	AGHTN2
2	Триммер лунки (Hole Trimmer)	AGHTR2	AGHTR2
3	Триммер лунки (Hole Trimmer)	AGHTW2	AGHTW2
4	Триммер лунки (Hole Trimmer)	AGHTN3	AGHTN3
5	Триммер лунки (Hole Trimmer)	AGHTR3	AGHTR3
6	Триммер лунки (Hole Trimmer)	AGHTW3	AGHTW3

24. Фреза Auto-Max (Auto-Max)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Фреза Auto-Max (Auto-Max)
			в упаковке 1 шт.
1	Фреза Auto-Max (Auto-Max)	AM2535	AM2535
2	Фреза Auto-Max (Auto-Max)	AM4050	AM4050
3	Фреза Auto-Max (Auto-Max)	AM5060	AM5060
4	Фреза Auto-Max (Auto-Max)	AM6070	AM6070

25. Имплантовод машинный (Handpiece Connector)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Имплантовод машинный (Handpiece Connector)
			в упаковке 1 шт.
1	Имплантовод машинный (Handpiece Connector)	TANHCU	TANHCU

2	Имплантовод машинный (Handpiece Connector)	TANHCS	TANHCS
3	Имплантовод машинный (Handpiece Connector)	TANHCL	TANHCL
4	Имплантовод машинный (Handpiece Connector)	HCS17	HCS17
5	Имплантовод машинный (Handpiece Connector)	HCL17	HCL17
6	Имплантовод машинный (Handpiece Connector)	OHCS	OHCS
7	Имплантовод машинный (Handpiece Connector)	TBH250S	TBH250S
8	Имплантовод машинный (Handpiece Connector)	TBH250L	TBH250L

26. Имплантовод для храпового ключа (Ratchet Connector)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Имплантовод для храпового ключа (Ratchet Connector)
			в упаковке 1 шт.
1	Имплантовод для храпового ключа (Ratchet Connector)	TANREU	TANREU
2	Имплантовод для храпового ключа (Ratchet Connector)	TANRES	TANRES
3	Имплантовод для храпового ключа (Ratchet Connector)	TANREL	TANREL
4	Имплантовод для храпового ключа (Ratchet Connector)	RCS17	RCS17
5	Имплантовод для храпового ключа (Ratchet Connector)	RCL17	RCL17
6	Имплантовод для храпового ключа (Ratchet Connector)	ORCS	ORCS

27. Удлинитель фрез (Drill Extension)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Удлинитель фрез (Drill Extension)
			в упаковке 1 шт.
1	Удлинитель фрез (Drill Extension)	MDE150	MDE150

28. Пин параллельности (Directon Indicator)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Пин параллельности (Directon Indicator)
			в упаковке 1 шт.
1	Пин параллельности (Directon Indicator)	MDI100	MDI100

29. Ключ динамометрический (Torque Wrench)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)	
			Ключ динамометрический (Torque Wrench)	Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter)
			в упаковке 1 шт.	в упаковке 1 шт.
1	Ключ динамометрический (Torque Wrench)	MTW300AT	MTW300A	TTAR100

30. Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter)
			в упаковке 1 шт.
1	Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter)	TTAI100	TTAI100
2	Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter)	TTAR100	TTAR100

31. Удлинитель для храпового ключа (Ratchet Extension)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Удлинитель для храпового ключа (Ratchet Extension)
			в упаковке 1 шт.
1	Удлинитель для храпового ключа (Ratchet Extension)	TBR250S	TBR250S
2	Удлинитель для храпового ключа (Ratchet Extension)	TBR250L	TBR250L

32. Отвертка для ключа динамометрического (Torque Driver)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Отвертка для ключа динамометрического (Torque Driver)
			в упаковке 1 шт.
1	Отвертка для ключа динамометрического (Torque Driver)	TBT250S	TBT250S
2	Отвертка для ключа динамометрического (Torque Driver)	TBT250L	TBT250L

33. Втулка шаблона (Stent Sleeve)

№	Наименование изделия	Код заказа изделия (Артикул)	Структура (Название модели)
			Втулка шаблона (Stent Sleeve)
			в упаковке 10 шт.
1	Втулка шаблона (Stent Sleeve)	R2SS35P	R2SS35
2	Втулка шаблона (Stent Sleeve)	R2SS50P	R2SS50

3	Втулка шаблона (Stent Sleeve)	R2SS65P	R2SS65
---	-------------------------------	---------	--------

11. Проверка правильности монтажа и готовности к безопасной эксплуатации

Правильность установки изделия проверяется посредством проведения рентгенологического исследования ОПТГ- ортопантограммы или компьютерной томографии КТ. Готовность к безопасной эксплуатации изделия проверяется с помощью динамометрического ключа (Torque Wrench) (MTW300AT).

12. Прочностные характеристики изделия

Испытания на усталость изделия проводились для оценки стабильности конструкции (имплантата и абатмента) в полости рта. Таким образом, условия испытаний должны максимально имитировать реальное использование изделия в полости рта. При окклюзии и жевании имплантат и абатмент подвергается воздействию как сжимающих, так и сдвигающих сил. Таким образом, испытание на усталость необходимо для определения условий нагрузки в соответствии с применимыми силами. Более подробная информация по прочностным характеристикам изделий указана в отчете производителя. Цель настоящих отчетов – установить пределы усталости изделий в различных условиях испытаний.

Физические параметры инструментов

Шероховатость рабочих частей: не более 0,8 мкм.

Твердость рабочей части: не менее 22 HRC

Прочность при кручении: более 36 Н.см.

13. Материалы изделия

Для изготовления изделий Системы дентальных имплантатов используют материалы, указанные в таблице 90.

Таблица 90.

№ п/ п	Изделие	Материал	Производитель	Контакт с человеком
I. Имплантаты дентальные (Dental Implants):				
1.	Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)	Титановый сплав CP Ti Grade 4 (Стандарт ASTM F67-13) <u>Обработка поверхности - XPEED</u>	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями, костью, дентином
	- Винт-заглушка (Cover Screw)	-Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Ti-6Al-4V ELI (Стандарт ASTM F136-13) <u>Цвет анодизации: Синий</u>	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями, костью, дентином
2.	Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)	Титановый сплав CP Ti Grade 4 (Стандарт ASTM F67-13) <u>Обработка поверхности - XPEED</u>	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
	- Винт-заглушка (Cover Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Стандарт ASTM F136-13. <u>Цвет анодизации: зеленый</u>	ZAPP AG Германия	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
II. Мембрана i-Gen (i-Gen Membrane)				
	Имплантат дентальный i-Gen	Титановый сплав CP Ti Grade 2. Стандарт ASTM F67-13. <u>Обработка: машинная</u>	COMBINED METALS OF CHICAGO LLC (Elgiloy Specialty Metals) США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.

III. Компоненты ортопедические (Prosthetic Components):

1.	Абатмент временный (Temporary Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI (Стандарт ASTM F136-13) <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
2.	Абатмент EZ Post (EZ Post Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI (Стандарт ASTM F136-13) <u>Цвет анодизации:</u> золотистый	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
3.	Абатмент CCM (CCM Abutment)	Платформа абатмента - кобальт-хромовый сплав CCM. Стандарт ASTM F1537-11. <u>Обработка:</u> машинная Верхний цилиндр – пластик POM (полиоксиметилен) (Стандарт DELRIN® 100P NC010) <u>Краситель:</u> - розовый, MPO50-907 F PINK - желтый, MPO80-645 YELLOW	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США DuPont, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
4.	Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Цвет анодизации:</u> золотистый	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
5.	Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Цвет анодизации:</u> золотистый	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
6.	Абатмент обтачиваемый (Milling Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Цвет анодизации:</u> золотистый	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
7.	Абатмент Octa (Octa Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Цвет анодизации:</u> золотистый	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
8.	Абатмент предохраняющий (Fuse Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. Пластик POM (полиоксиметилен). Стандарт DELRIN® 100P NC010. <u>Краситель:</u> - белый, MPO70-334 SUPER WHITE	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США DuPont, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
9.	Абатмент угловой (Angled Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Цвет анодизации:</u> золотистый	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
10	Абатмент примерочный (Try-in Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Цвет анодизации:</u> светло-желтый	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой и кожей.
11	Абатмент Meg-Rhein (Meg-Rhein Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> покрытие TiN (нитрид титана)	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
12	Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
13	Абатмент сканируемый (Scan Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой и кожей.
14	Абатмент сканируемый Тип C (Scan Abutment C-type)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой и кожей.

15	Абатмент премил (TiGen Abutment) ARTR1020.MTN, ARTR1020N.MT, ARTR1220.MTN, ARTR1220N.MTN	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Цвет анодизации:</u> золотистый	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
	Абатмент премил (TiGen Abutment) OCTS1020, NOTS1020 OCTR1020, NOTR1020 OCTR1220, NOTR1220 MITN1020.MTN, MITN1020N.MTN	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. Обработка: машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
16	Винт-заглушка i-Gen (i-Gen Cover Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Цвет анодизации:</u> зеленый	ZAPP AG Германия	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
17	Винт i-Gen (i-Gen Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная	ZAPP AG Германия	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
18	Винт Multi Post (Multi Post Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Цвет анодизации:</u> золотистый, синий	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
19	Винт абатмента (Abutment Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
20	Винт абатмента Multi-unit (Multi-unit Abutment Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Цвет анодизации:</u> золотистый, синий	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
21	Винт цилиндра (Cylinder Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
22	Винт S.H.A (S.H.A Screw)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Цвет анодизации:</u> золотистый, зеленый. <u>Обработка поверхности:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
23	Навигационный пин (Guide Pin)	Нержавеющая сталь S30300. Стандарт ASTM F899-12b. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой и кожей.
24	Трансфер слепочный для закрытой ложки (Impression Coping, Transfer)	Нержавеющая сталь S30300. Стандарт ASTM F899-12b. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой и кожей.
25	Трансфер слепочный для открытой ложки (Impression Coping, Pick-up)	Нержавеющая сталь S30300. Стандарт ASTM F899-12b. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой и кожей.
26	Трансфер слепочный металлический (Stainless Impression Coping)	Нержавеющая сталь S30300. Стандарт ASTM F899-12b. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой и кожей.
27	Трансфер слепочный пластиковый (Snap Impression Coping)	Пластик POM (полиоксиметилен). Стандарт DELRIN® 100P NC010. <u>Краситель:</u> - желтый, MPO80-645 YELLOW - белый, MPO70-334 SUPER WHITE - розовый, MPO50-907 F PINK	DuPont, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой и кожей.

28	Аналог лабораторный (Lab Analog): AANLAF35, AANLAF4055, AALLAF6080	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Цвет анодизации:</u> фиолетовый, синий, золотистый	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
	Аналог лабораторный (Lab Analog): AANSLF440, AANSLF455, AANSLF470, AANSLF540, AANSLF555, AANSLF570, AANSLF640, AANSLF655, AANSLF670, AANSLF740, AANSLF755, AANSLF770, AANOLA4000, IOA300, MUALA, PLA, MILA300H	Нержавеющая сталь S30300. Стандарт ASTM F899-12b. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
29	Аналог RP (RP Analog)	- Нержавеющая сталь S30300. Стандарт ASTM F899-12b. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
30	Цилиндр временный (Temporary Cylinder)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI . Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
31	Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder)	Пластик POM (полиоксиметилен) (Стандарт DELRIN® 100P NC010) <u>Краситель:</u> - белый, MPO70-334 SUPER WHITE - красный, DPO51984 RED	DuPont, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
32	Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI . Стандарт ASTM F136-13. <u>Цвет анодизации:</u> золотистый	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
33	Цилиндр CCM (CCM Cylinder)	Платформа абатмента - кобальт-хромовый сплав CCM. Стандарт ASTM F1537-11. Обработка: машинная Верхний цилиндр – пластик POM (полиоксиметилен). Стандарт DELRIN® 100P NC010. <u>Краситель:</u> - розовый, MPO50-907 F PINK - желтый, MPO80-645 YELLOW	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США DuPont, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
34	Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder)	Пластик POM (полиоксиметилен). Стандарт DELRIN® 100P NC010. <u>Краситель:</u> - белый, MPO70-334 SUPER WHITE - красный, DPO51984 RED	DuPont США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
35	Колпачок защитный (Comfort Cap)	Пластик POM (полиоксиметилен). Стандарт DELRIN® 100P NC010. <u>Краситель:</u> - белый, MPO70-334 SUPER WHITE - розовый, MPO50-907 F PINK - желтый, MPO80-645 YELLOW	DuPont США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
36	Колпачок предохраняющий (Healing Cap)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI . Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
37	Скан пост (Scan Post)	Пластик POM (полиоксиметилен). Стандарт DELRIN® 100P NC010. <u>Краситель:</u> - белый, MPO70-334 SUPER WHITE	DuPont, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой и кожей.
38	Колпачок абатмента	Пластик POM	DuPont,	Долгосрочный (> 30 суток)

	предохраняющего (Fuse Cap)	(полиоксиметилен). Стандарт DELRIN® 100P NC010. <u>Краситель:</u> - белый, MPO70-334 SUPER WHITE	США	контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
39	Металлическая матрица с ретенционным кольцом (Metal Housing)	-Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI . Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная -Фторированный каучук Стандарт TECNOFLON® COPOLYMER FOR BA SERIES	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США SOLVAY, Бельгия	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
40	Ретенционное кольцо (Retentive Ring)	Фторированный каучук Стандарт TECNOFLON® COPOLYMER FOR BA SERIES	SOLVAY, Бельгия	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
41	Матрица металлическая (Stainless Steel Housing) ТНР	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI . Стандарт ASTM F136-13. Цвет анодизации: желтый	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
	Матрица металлическая (Stainless Steel Housing) МНР	Нержавеющая сталь S30300. Стандарт ASTM F899-12b. <u>Обработка:</u> машинная	DONG-IL STEEL MFG. CO., LTD. Корея	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
42	Колпачок ретенционный (Retentive Cap)	- Полиэфирный блок-амид (PEBA). Стандарт Pebax® MX 1205. <u>Краситель:</u> - желтый, POLYBATCH YELLOW 2028 E - Полиамид 11 (Polyamide 11) <u>Краситель:</u> - розовый, POLYBATCH Pink 5080 - черный, Carbon black - Полиоксиметилен (POM) <u>Краситель:</u> - фиолетовый, POLYBATCH COLOR Violet 4022	ARKEMA, Франция ARKEMA, Франция KOREA ENGINEERING PLASTICS CO.,LTD. Корея	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.

IV. Формирователь десны (Healing Abutment):

1.	Формирователь десны (Healing Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
2.	Формирователь десны сканируемый (Scan Healing Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная <u>Цвет анодизации:</u> золотистый, зеленый	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
3.	Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI . Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная	ZAPP AG Германия	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.

V. Титановое основание (ZrGen Abutment):

1.	Титановое основание (ZrGen Abutment)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
2.	Титановое основание Тип C (ZrGen Abutment C-Type)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI . Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
VI. Набор Meg-Ball				Долгосрочный (> 30 суток)

для съемного протезирования (Meg-Ball Package), в составе: - Абатмент Meg-Ball (Meg-Ball Abutment) - Металлическая матрица с ретенционным кольцом (Metal Housing) - Позиционер матрицы (Housing Positioner)	- Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI . Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная - Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI . Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> машинная Фторированный каучук Стандарт TECNOFLON® COPOLYMER FOR BA SERIES - Полиэтилен LDPE(Polyethylene). Стандарт LDPE XJ700 <u>Краситель:</u> - желтый, GRADE 205 - красный, GRADE 415 - синий, GRADE 702 - белый.	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США SOLVAY, Бельгия LOTTE CHEMICAL, Корея	контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.
VII. Набор Meg-Rhein для съемного протезирования (Meg-Rhein Overdenture System), в составе: - Абатмент Meg-Rhein (Abutment Meg-Rhein) - Колпачок ретенционный (Retentive Cap) - Трансфер слепочный пластиковый (Plastic Impression Coping) - Матрица металлическая (Stainless Steel Housing), в составе:	 - Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI . Стандарт ASTM F136-13. <u>Обработка:</u> покрытие TiN (нитрид титана) - Полиэфирный блок-амид (PEBA). Стандарт Pebax® MX 1205. <u>Краситель:</u> - желтый, POLYBATCH YELLOW 2028 E - Полиамид 11 (Polyamide 11) <u>Краситель:</u> - розовый, POLYBATCH Pink 5080 - черный, Carbon black - Полиоксиметилен (POM) <u>Краситель:</u> - фиолетовый, POLYBATCH COLOR Violet 4022 - Пластик POM (полиоксиметилен). Стандарт DELRIN® 100P NC010. <u>Краситель:</u> - белый, MPO70-334 SUPER WHITE	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США ARKEMA, Франция ARKEMA, Франция KOREA ENGINEERING PLASTICS CO., LTD. Корея DuPont США DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Долгосрочный (> 30 суток) контакт с мягкими тканями и слизистой оболочкой.

- MHP	- Нержавеющая сталь S30300. Стандарт ASTM F899-12b. <u>Обработка</u> : машинная		
- THP	- Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Стандарт ASTM F136-13. <u>Цвет анодизации</u> : желтый		
- Диск защитный (Protective Disk)	- Пластик POM (полиоксиметилен). Стандарт DELRIN® 100P NC010. - белый, MPO70-334 SUPER WHITE	DuPont США	

VIII. Инструменты стоматологические (Dental Instruments):

1.	Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier) MUAAC	Титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Стандарт ASTM F136-13 <u>Обработка</u> : машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
	Инструмент для введения Multi-unit (Multi-unit Carrier) MUASC	POM (полиоксиметилен) Стандарт DELRIN(R) 100P NC010 <u>Краситель</u> : - белый, MPO70-334 SUPER WHITE	DuPont США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
2.	Отвертка Multi-unit (Multi-unit Driver)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная <u>Цвет анодизации</u> : синий	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
3.	Отвертка для извлечения Multi-unit (Multi-unit Removal Driver)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная <u>Цвет анодизации</u> : синий	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
4.	Отвертка ручная (Hand Driver)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная <u>Цвет анодизации</u> : синий	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
5.	Отвертка машинная Multi-unit (Right Angle Driver Multi-unit)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
6.	Отвертка для слепочного трансфера (Impression Driver) TCMID, TBT250L	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
	Отвертка для слепочного трансфера (Impression Driver) TCMIDE	Нержавеющая сталь S30300. Стандарт ASTM F899-12b. <u>Обработка</u> : машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
7.	Отвертка для извлечения абатмента (Abutment Removal Driver)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная <u>Цвет анодизации</u> : синий	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
8.	Отвертка Octa (Octa Driver)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
9.	Отвертка для углового наконечника (Right Angle Driver)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.

				оболочкой.
10	Отвертка установочная (Insert Driver)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
11	Отвертка для установки ретенционного колпачка (Retentive Cap Insertion Tool)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная <u>Цвет маркировки</u> : синий	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
12	Сверло копьевидное (Lance Drill)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
13	Фреза маркировочная (Marking Drill)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : поверхность TiN	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
14	Фреза формирующая (Shaping Drill)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : поверхность TiN	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
15	Фреза со стоппером (Stopper Drill)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная, поверхность TiN	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
16	Трепан с центральным пином (Point Trephine Bur)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
17	Фреза кортикальная (Cortical Bone Drill)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
18	Бур трепанационный (Trephine Bur)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
19	Профилировщик кости (Bone Profiler)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
	- Навигационный пин для профилировщика кости (Bone Profiler Guide Pin)	Титановый сплав Ti-6Al-4V ELI (Стандарт ASTM F136-13) Цвет анодизации: золотистый		
20	Сверло Линдемманна (Lindermann Drill)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : поверхность TiN	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
21	Фреза выравнивающая (Flattening Drill)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
22	Перфоратор слизистой оболочки (Tissue Punch)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка</u> : машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
23	Триммер лунки (Hole	Мартенситная сталь S17400.	DYNAMET A	Кратковременный (< 24

	Trimmer)	Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка:</u> машинная	CARPENTER COMPANY, США	часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
24	Фреза Auto-Max (Auto-Max)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка:</u> машинная <u>Цвет анодизации:</u> золотистый	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
25	Имплантовод машинный (Handpiece Connector)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
26	Имплантовод для храпового ключа (Ratchet Connector)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
27	Удлинитель фрез (Drill Extension)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
28	Пин параллельности (Directon Indicator)	Мартенситная сталь S17400. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
29	Ключ динамометрический (Torque Wrench)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
30	Адаптер для динамометрического ключа (Torque Wrench Adapter)	Мартенситная сталь S17400. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
31	Удлинитель для храпового ключа (Ratchet Extension)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
32	Отвертка для ключа динамометрического (Torque Driver)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
33	Втулка шаблона (Stent Sleeve)	Мартенситная сталь S42010. Стандарт ASTM F899 12B. <u>Обработка:</u> машинная	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с мягкими тканями, со слизистой оболочкой.
Материалы упаковки имплантатов				
1	Внешняя капсула	Стирол-бутадиеновый сополимер (SBC Poly, K-resin®)	CPChem, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
2	Внутренняя капсула	Стирол-бутадиеновый сополимер (SBC Poly, K-resin®)	CPChem, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
3	Держатель винта-заглушки	Стирол-бутадиеновый сополимер (SBC Poly, K-resin®)	CPChem, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
4	Втулка	Титановый сплав CP Ti Grade 4 (Стандарт ASTM F67-13)	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
5	Титановый держатель	Титановый сплав CP Ti Grade 4 (Стандарт ASTM F67-13)	DYNAMET A CARPENTER COMPANY, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
6	Пластиковый контейнер	A-PET (полиэтиленовый терефталат) Герметизирующая бумага - PERFECSEAL CR27 1073B c	Plastech Co., Ltd. Корея DuPont,	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей

		покрытием Tyvek®	США	
7	Коробка	Картон (PULP, CELLULOSE, Talc, KAOLIN, WATER)	MOORIM SP CORP., Ltd. Корея	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
<i>Материалы упаковки мембраны i-Gen</i>				
1	Подложка мембраны	Стирол-бутадиеновый сополимер (SBC Poly, K-resin®)	CPChem, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
2	Пластиковый контейнер	Стирол-бутадиеновый сополимер (SBC Poly, K-resin®) Герметизирующая бумага -PERFECSEAL CR27 1073B с покрытием Tyvek®	CPChem, США DuPont, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
3	Коробка	Картон (PULP, CELLULOSE, Talc, KAOLIN, WATER)	MOORIM SP CORP., Ltd. Корея	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
<i>Материалы упаковки компонентов ортопедических, формирователя десны и набора Meg-Ball</i>				
1	Пластиковый контейнер	Стирол-бутадиеновый сополимер (SBC Poly, K-resin®) Герметизирующая бумага -PERFECSEAL CR27 1073B с покрытием Tyvek®	CPChem, США DuPont, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
<i>Материалы упаковки трансфера слепочного металлического</i>				
1	Пластиковый контейнер-колба	Полиэтилен LD (POLIETILENE LD)	MATTEIPLAST, Италия	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
2	Пакет	Полиэтилен LD (POLIETILENE LD)	MATTEIPLAST, Италия	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
<i>Материалы упаковки абатмента премил, титанового основания и титанового основания Тип С</i>				
1	Пластиковый контейнер	Стирол-бутадиеновый сополимер (SBC Poly, K-resin®) Герметизирующая бумага -PERFECSEAL CR27 1073B с покрытием Tyvek®	CPChem, США DuPont, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
2	Коробка	Картон (PULP, CELLULOSE, Talc, KAOLIN, WATER)	MOORIM SP CORP., Ltd. Корея	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
<i>Материалы упаковки набора Meg-Rhein, колпачка ретенционного и матрицы металлической</i>				
1	Контейнер (лоток+крышка)	Стирол-бутадиеновый сополимер (SBC Poly, K-resin®)	CPChem, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
2	Крафт-пакет	Герметизирующая бумага - PERFECSEAL CR27 1073B с покрытием Tyvek® Пленка - PerfecFlex® (OPET/PE/EZ Peel®Sealant)	DuPont, США Bemis Company, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
3	Коробка	Картон (PULP, CELLULOSE, Talc, KAOLIN, WATER)	MOORIM SP CORP., Ltd. Корея	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
<i>Материалы упаковки инструментов стоматологических</i>				
1	Ключ динамометрический			
	Крафт-пакет	Герметизирующая бумага - PERFECSEAL CR27 1073B с покрытием Tyvek® Пленка - PerfecFlex® (OPET/PE/EZ Peel®Sealant)	DuPont, США Bemis Company, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
2	Втулка шаблона, триммер лунки (AGHTN3, AGHTR3, AGHTW3), копьевидное сверло (LD1618L, LD2025, LD2030) и формирующая фреза (SD2518L, SD2818L)			
	Пакет	Полиамид Нейлон-6 (Polyamide Nylon-6) (спереди), Алюминий (Aluminium) (сзади)	DONG-A Package Co.,Ltd. Корея	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
3	Отвертка для установки ретенционных колпачков			
	Пакет	Полиэтилен LD (POLIETILENE LD)	MATTEIPLAST, Италия	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
4	Остальные инструменты (в т.ч. триммер лунки (AGHTN2, AGHTR2, AGHTW2), копьевидное сверло (MGD100L, LD1618S, LD1618M, LD2015) и формирующая фреза (SD2818S, SD2518M, SD2518S, SD2818M)			

Пластиковый контейнер	Стирол-бутадиеновый сополимер (SBC Poly, K-resin®) Герметизирующая бумага - PERFECSEAL CR27 1073B с покрытием Tyvek®	CPChem, США DuPont, США	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
-----------------------	---	--------------------------------	--

Изделия изготовлены из материалов, не обладающих цитотоксическим, раздражающим, сенсibiliзирующим и токсическим действием, и при использовании не оказывают негативного воздействия на человека и полностью безопасны.

14. Требования безопасности

Изделия изготовлены из материалов, не обладающих цитотоксическим, раздражающим, сенсibiliзирующим и токсическим действием, и при использовании не оказывают негативного воздействия на человека и полностью безопасны. Более подробная оценка биологической безопасности изделий приведена в выписке из ТФ производителя.

15. Наличие лекарственного средства в составе изделия

При производстве изделия лекарственные средства, фармакологические субстанции, а также материалы животного и (или) человеческого происхождения не применялись.

16. Стандарты

Перечень национальных и международных стандартов, которым соответствует медицинское изделие, указан в выписке из ТФ производителя.

17. Стерильность/ стерилизация перед применением

Порядок проведения стерилизации изделия, указан в выписке из ТФ производителя.

18. Упаковка и маркировка изделия

18.1 Упаковка и маркировка имплантатов:

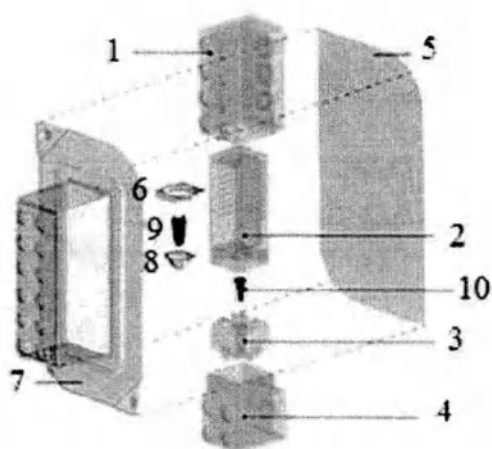
Индивидуальная упаковка имплантата XPEED AnyRidge®

Внутри прозрачного пластикового контейнера размером 45.0 мм x 82.0 мм, размещается внешняя капсула изделия, которая делится на внешнюю верхнюю и внешнюю нижнюю капсулы.

Во внешнюю верхнюю капсулу помещается внутренняя верхняя капсула с имплантатом, где имплантат фиксируется титановым держателем и втулкой.

Во внешнюю нижнюю капсулу помещается внутренняя нижняя капсула с винтом-заглушкой. Винт-заглушка размещена, на держателе винта-заглушки, встроенном, в нижнюю часть внутренней нижней капсулы.

Схематическое изображение компонентов индивидуальной упаковки.



№	Компонент
1	Внешняя капсула
2	Внутренняя средняя капсула
3	Держатель винта-заглушки
4	Внутренняя нижняя капсула
5	Крышка контейнера
6	Втулка
7	Прозрачный контейнер
8	Титановый держатель
9	Имплантат дентальный
10	Винт-заглушка

Внешняя верхняя капсула с имплантатом, соединяется с внешней нижней капсулой, содержащей винт-заглушку, образуя цельную капсулу. Закрытие капсулы производится на запечатывающей машине. Параметры указаны в Таблице.

Параметры	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
Температура, С°	82	99	127
Время, сек	0,5	1	3
Давление, бар	2,72	2,72	4,1

Цельная капсула с изделием, помещается в прозрачный пластиковый контейнер, после чего запечатывается материалом PERFECSEAL CR27 1073B с покрытием Tyvek®, при помощи упаковочного автомата. На крышку контейнера наклеиваются этикетки-стикеры (3 шт) с маркировкой.

Далее, изделие отправляется на стерилизацию. Стерилизация осуществляется методом гамма-излучения. В индивидуальной упаковке, каждый компонент изделия деконтаминирован. При вскрытии, изделие может контактировать только со стерильными инструментами и только в асептических условиях.

- Потребительская упаковка имплантата XPEED AnyRidge®

Изделие в индивидуальной упаковке, помещается в картонную коробку размером 87 мм x 49 мм x 29 мм, которая является потребительской упаковкой изделия. Потребительская упаковка предназначена для защиты изделия от повреждений при хранении и транспортировке.

Схематическое изображение содержимого потребительской упаковки (коробки картонной) имплантата XPEED AnyRidge®.



Потребительская упаковка включает в себя: прозрачный пластиковый контейнер с изделием, инструкцию по применению, которые помещаются в картонную коробку. Маркировка нанесена на саму коробку и на этикетку коробки, которая фиксируется с задней стороны. Этикетки-стикеры (3 шт.), которые содержались на крышке блистерной упаковки изделия, после вскрытия контейнера переклеиваются в медицинскую карту пациента.

- Маркировка индивидуальной упаковки имплантата XPEED AnyRidge®

Этикетка-стикер на блистерной упаковке (контейнере)



XPEED
AnyRidge®
Internal Fixture
(C3.4) Ø3.5/L15.0

Model
name

LOT

SN

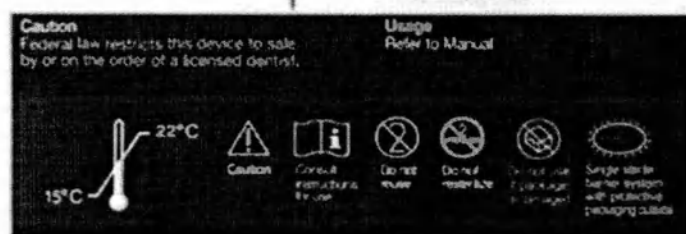
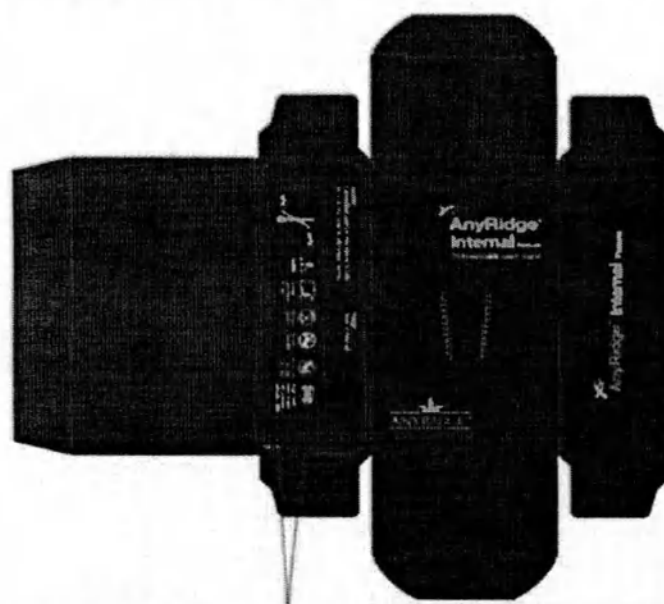
UDI

UDI-DI (01)08806388220687



Наименование изделия
Размер (диаметр и
длина)
Номер модели
Номер партии
Серийный номер
Уникальный
идентификационный
номер изделия
Долгосрочный
уникальный
идентификационный
номер изделия
QR-код для
идентификации изделия
Логотип компании -
производителя

- Маркировка потребительской упаковки имплантата XPEED AnyRidge®



Макет разворота потребительской упаковки
(коробки картонной)

Информация, нанесённая на
потребительскую упаковку (коробку
картонную):

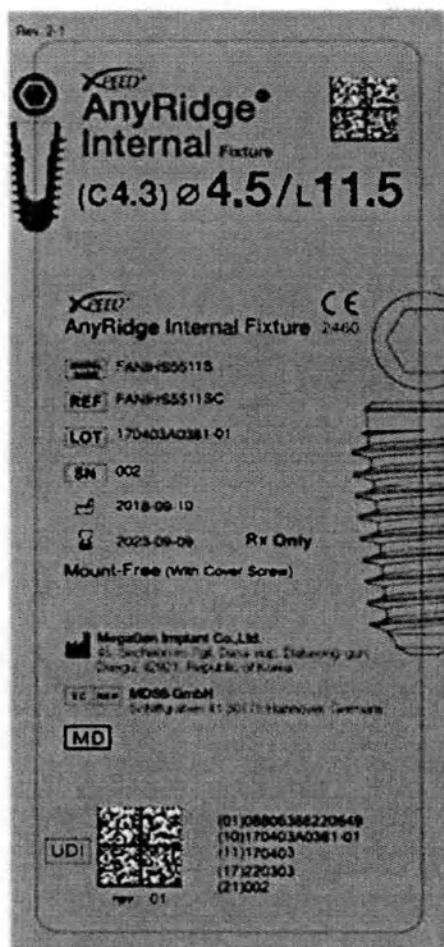
- Наименование изделия
- Символы: «Диапазон температур при
хранении изделия», «Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению!»,
«Повторное применение запрещено», «Не
стерилизовать повторно», «Не использовать
при повреждении упаковки», «Стерильно!
Радиационная стерилизация»,
«Температурное ограничение».

Этикетка-наклейка на потребительскую упаковку содержит:

XPEED
AnyRidge®
(C4.3)
Ø4.5/L11.5

Model
name

Наименование изделия
Размер (диаметр и длина)
Номер модели



Номер по каталогу (артикул)

Номер партии

Серийный номер

Дата изготовления
(в формате ГГГГ-ММ-ДД)



Использовать до
(в формате ГГГГ-ММ-ДД)



Изготовитель (название и адрес)



Уполномоченный представитель
в Европейском сообществе



QR-код для идентификации изделия



Поверхность с покрытием XPEED



Знак соответствия изделия нормативным
требованиям Европейского союза



Уникальный идентификационный номер
медицинского изделия



Макет маркировки имплантата XPEED AnyRidge® на русском языке

Имплантат дентальный XPEED AnyRidge® с внутренним соединением (XPEED AnyRidge® Internal Fixture)

РУ № xxxxxx от дд. Мм. Гггг.

Производитель: МегаДжен Имплант Ко., Лтд, 45 Secheon-ro 7-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu 42921, Korea

Уполномоченный представитель в России:

ООО «ИМПЛАНТ ТРЕЙД», 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7.

Осторожно! Перед использованием, обратитесь к инструкции по применению.

- Индивидуальная упаковка имплантата MiNi


Внутри прозрачного пластикового контейнера размером 45.0 мм x 82.0 мм, размещается внешняя капсула изделия, которая делится на внешнюю верхнюю и внешнюю нижнюю капсулы.

Во внешнюю верхнюю капсулу помещается внутренняя верхняя капсула с имплантатом, где имплантат фиксируется титановым держателем и втулкой.

Во внешнюю нижнюю капсулу помещается внутренняя нижняя капсула с винтом-заглушкой. Винт-заглушка размещена, на держателе винта-заглушки, встроенном, в нижнюю часть внутренней нижней капсулы.

Схематическое изображение компонентов индивидуальной упаковки.

№	Компонент
1	Внешняя капсула
2	Внутренняя средняя капсула
3	Держатель винта-заглушки

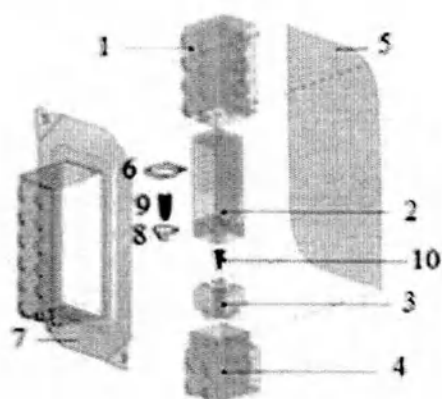

- 4 Внутренняя нижняя капсула
- 5 Крышка контейнера
- 6 Втулка
- 7 Прозрачный контейнер
- 8 Титановый держатель
- 9 Имплантат дентальный
- 10 Винт-заглушка

Внешняя верхняя капсула с имплантатом, соединяется с внешней нижней капсулой, содержащей винт-заглушку, образуя цельную капсулу. Закрытие капсулы производится на запечатывающей машине. Параметры указаны в Таблице.

Параметры	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
Температура, С°	82	99	127
Время, сек	0,5	1	3
Давление, бар	2,72	2,72	4,1

Цельная капсула с изделием, помещается в прозрачный пластиковый контейнер, после чего запечатывается материалом PERFECSEAL CR27 1073В с покрытием Tyvek®, при помощи упаковочного автомата. На крышку контейнера наклеиваются этикетки-стикеры (3 шт) с маркировкой. Далее, изделие отправляется на стерилизацию. Стерилизация осуществляется методом гамма-излучения. В индивидуальной упаковке, каждый компонент изделия деконтаминирован. При вскрытии, изделие может контактировать только со стерильными инструментами и только в асептических условиях.

- Потребительская упаковка имплантата MiNi

Изделие в индивидуальной упаковке, помещается в картонную коробку размером 87 мм х 49 мм х 29 мм, которая является потребительской упаковкой изделия.

Схематическое изображение содержимого потребительской упаковки (коробки картонной) имплантата MiNi



Потребительская упаковка включает в себя: прозрачный пластиковый контейнер с изделием,

инструкцию по применению и 3 этикетки-стикера. Все составляющие упаковки помещаются в картонную коробку. Маркировка нанесена на саму коробку и на этикетку коробки, которая фиксируется с задней стороны. Этикетки-стикеры (3шт.), которые содержались на крышке блистерной упаковке изделия, после вскрытия контейнера переклеиваются в медицинскую карту пациента.

- Маркировка индивидуальной упаковки имплантата MiNi

Этикетка-стикер на блистерной упаковке (контейнере)



MiNi Internal
Fixture
(C3.4) Ø3.5/L7.0

Наименование изделия

Model
name

Размер (диаметр и длина)

LOT

Номер модели

SN

Номер партии

UDI

Серийный номер

UDI-DI (01)08806388220649

Уникальный
идентификационный номер
изделия



Долгосрочный уникальный
идентификационный номер
изделия

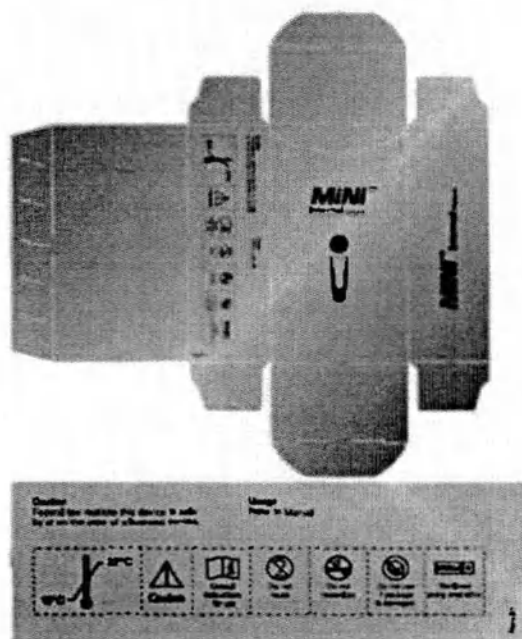


QR-код для идентификации
изделия

Логотип компании -
производителя

Макет разворота потребительской упаковки (коробки картонной)

Этикетка-наклейка на потребительскую упаковку содержит:



Информация, нанесённая на потребительскую
упаковку (коробку картонную):

- Наименование изделия;

- Символы: «Диапазон температур при хранении
изделия», «Осторожно! Обратитесь к инструкции
по применению!», «Повторное применение
запрещено», «Не стерилизовать повторно»,

«Не использовать при повреждении упаковки»,

«Стерильно! Радиационная стерилизация».

MiNi Internal

Наименование изделия



Fixture
(C3.4) Ø3.5/L7.5

Model
name

REF

LOT

SN



EC REP



Размер (диаметр и длина)

Номер модели

Номер по каталогу (артикул)

Номер партии

Серийный номер

Дата изготовления
(в формате ГГГГ-ММ-ДД)

Использовать до
(в формате ГГГГ-ММ-ДД)

Изготовитель (название и адрес)

Уполномоченный представитель
в Европейском сообществе

QR-код для идентификации изделия

Поверхность с покрытием XPEED

Знак соответствия изделия нормативным
требованиям Европейского союза
Уникальный идентификационный номер
медицинского изделия

Макет маркировки на русском языке

Имплантат дентальный MiNi с внутренним соединением (MiNi Internal Fixture)

РУ № xxxxx от дд. мм. гггг.

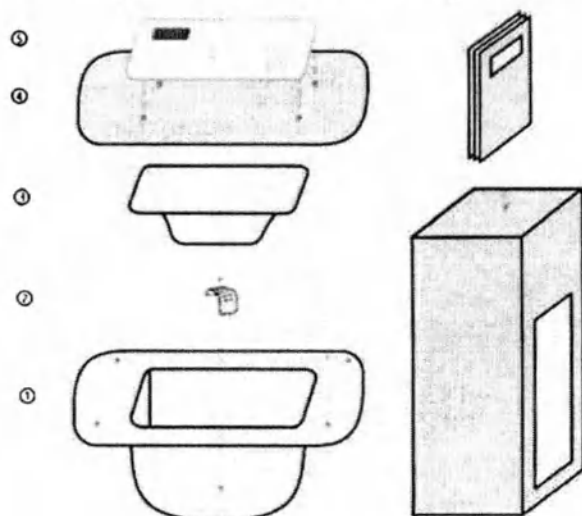
Производитель: МегаДжен Имплант Ко., Лтд., 45, Secheon-ro 7-gil, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu 42921, Korea

Уполномоченный представитель в России: ООО «ИМПЛАНТ ТРЕЙД», 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 18, пом. III, ком. 7.

Осторожно! Перед использованием, обратитесь к инструкции по применению!

18.2 Упаковка и маркировка мембраны i-Gen

- индивидуальная упаковки мембраны i-Gen



Схематическое изображение компонентов
индивидуальной упаковки мембраны i-Gen

1) Контейнер

2) Мембрана

3) Подложка мембраны

4) Крышка контейнера


5) Этикетка

Мембрана размещается на конусообразной подложке (размером 33x20x50 мм), которая помещается в прозрачный пластиковый контейнер (размером 78x27x78 мм), после чего контейнер запечатывается материалом PERFECSEAL CR27 1073B с покрытием Tyvek®, при помощи упаковочного автомата (параметры указаны в Таблице). На крышку контейнера наклеивается этикетка с маркировкой.

Параметры	Минимальное значение	Среднее значение	Максимальное значение
Температура, С°	82	99	127
Время, сек	0,5	1	3
Давление, бар	2,72	2,72	4,1

Далее, изделие отправляется на стерилизацию. Стерилизация осуществляется методом гамма-излучения. В индивидуальной упаковке, каждый компонент изделия деконтаминирован. При вскрытии, изделие может контактировать только со стерильными инструментами и только в асептических условиях.

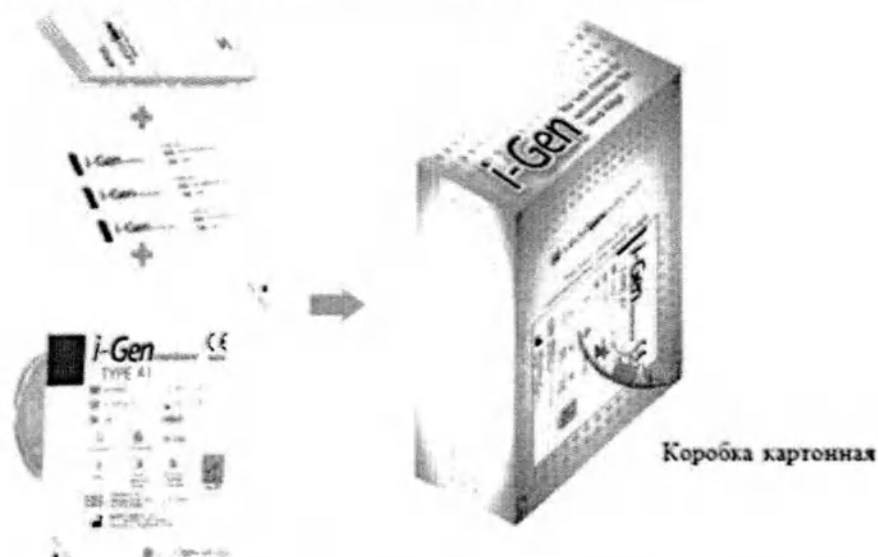- Потребительская упаковка мембраны i-Gen




Блистерная упаковка (контейнер) содержащая мембрану на подложке + инструкция по применению + 3 этикетки-стикера.

Потребительская упаковка включает в себя: прозрачный пластиковый контейнер (размером 78x27x78 мм) с изделием, инструкцию по применению, этикетку-стикер (3 шт), которые помещаются в картонную коробку, размером 80x28x100 мм. Маркировка нанесена на саму коробку и на этикетку коробки, которая фиксируется с передней стороны.

Этикетка-стикер для медицинской карты пациента

i-Gen membrane	Type A1 LOT:171122A0390-01 M:002 REF:00104509	i-Gen membrane	Наименование изделия
i-Gen membrane	Type A1 LOT:171122A0390-01 M:002 REF:00104509	Type A1 LOT	Тип Номер партии
i-Gen membrane	Type A1 LOT:171122A0390-01 M:002 REF:00104509	SN	Серийный номер
		REF	Номер по каталогу (артикул)

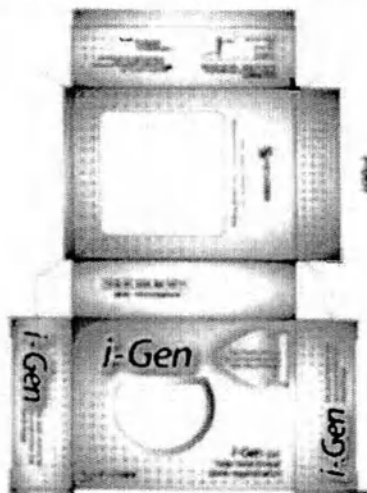Макет разворота потребительской упаковки (коробки картонной)



Информация, нанесённая на потребительскую упаковку (коробку картонную):

- Наименование изделия;
- Символы: «Температурное ограничение», «Стерильно! Радиационная стерилизация», «Осторожно!», «Повторное применение запрещено», «Официальный представитель в ЕС», «Адрес».

Этикетка-наклейка на потребительскую упаковку содержит:



i-Gen membrane Type A1	Наименование изделия
Model name	Тип
REF	Номер модели
LOT	Номер по каталогу (артикул)
SN	Номер партии
	Серийный номер
	Дата изготовления (в формате ГГГГ-ММ-ДД)
	Использовать до (в формате ГГГГ-ММ-ДД)
STERILE R	Изготовитель (название и адрес)
	Стерильно. Радиационная стерилизация
	Не стерилизовать повторно
	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Запрет на повторное применение
Rx Only	Данное изделие может быть отпущено аптекой только по рецепту, на территории США.
EC REP	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	QR-код для идентификации изделия
	Поверхность с покрытием XPEED
CE	Знак соответствия изделия нормативным требованиям Европейского союза



Уникальный идентификационный
номер медицинского изделия

Макет маркировки на русском языке

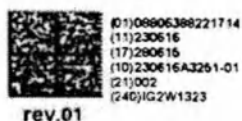


Мембрана i-Gen
(i-Gen membrane)
Тип В3

REF IG2W1323 2023-06-16 SN 002
LOT 230616A3251-01 2028-06-15 STERILE R



Rx Only



MegaGen Implant Co., Ltd

MDSD GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover Germany

ООО «Мегалейт Тонед», 125124 г. Москва
ул. 3-я Рязанская д. 18, пом. III, ком. 7

Размеры и материалы упаковки:

Наименование	Размер (Ш*В*Д)	Материал
Подложка мембраны	33 мм*20 мм*50 мм	Стирол-бутадиеновый сополимер (SBC Poly, K-Resin®)
Контейнер	78 мм*27 мм*78 мм	Стирол-бутадиеновый сополимер (SBC Poly, K-Resin®)
Герметизирующая бумага	78 мм*78 мм	Материал Tyvek® CR27 1073B
Коробка	100 мм*28 мм*80 мм	Картон

18.3 Упаковка и маркировка компонентов ортопедических, формирователя десны и набора Meg-Ball

Изделия упаковываются в прозрачный пластиковый контейнер, на крышку которого наклеивается стикер с маркировкой.


Индивидуальная упаковка одинакова для всех изделий. Индивидуальная упаковка изделия осуществляется в чистой комнате, которая относится к классу 10 000 или меньше. Изделие и инструкция по применению укладываются в прозрачный пластиковый контейнер, а затем с помощью упаковочного автомата, запечатываются материалом PERFECSEAL CR27 1073B с покрытием Tyvek®. На крышку контейнера наклеивается этикетка с маркировкой.

Размеры и материалы упаковки:

Наименование	Размер (Ш*В*Д)	Материал
Пластиковый контейнер	60 мм*65 мм*12 мм	Стирол-бутадиеновый сополимер (SBC Poly, K-Resin®)
Герметизирующая бумага	60 мм*65 мм	Материал Tyvek® CR27 1073B

Схема упаковки

Индивидуальная упаковка		
Схема	Символ	Процедура упаковки
	①	Изделие укладывается в прозрачный пластиковый контейнер, в первое отделение
	②	Инструкция по эксплуатации укладывается в прозрачный пластиковый контейнер, во второе отделение

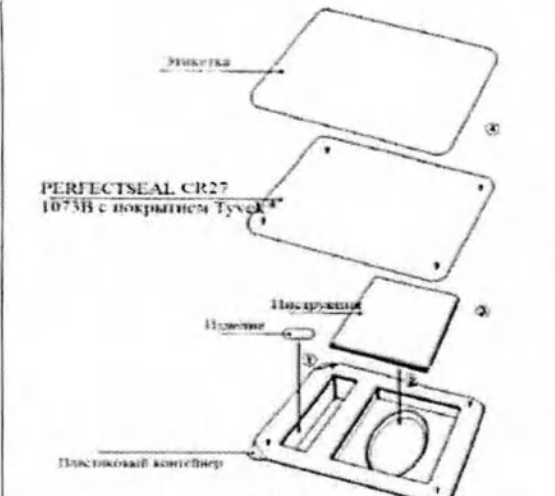	Производится упаковка с помощью упаковочного автомата			
	Режим	Мин.	Сред.	Макс.
	Температура, [°C]	82	99	127
	Время, [сек]	0,5	1	3
	Давление, [бар]	2,72	2,72	4,1
④	Этикетка См. Маркировка изделий.			

Упаковочная единица: в соответствии с комплектом поставки п.10 данного документа.

Изделия, поставляемые в стерильном виде, такие как винт-заглушка, формирователь десны, формирователь десны сканируемый, Винт S.H.A, винт-заглушка i-Gen и винт i-Gen, после упаковки в пластиковый контейнер, подлежат стерилизации гамма-излучением. Остальные изделия поставляются в пластиковом контейнере в нестерильном виде и стерилизуются пользователем (паровым методом, в автоклаве) перед применением.

- Маркировка компонентов ортопедических, формирователя десны и набора Meg-Ball
 Маркировка индивидуальной упаковки



CE 2460
EZ Post Abutment [AR]
 Ø5/ C=2/ P=5.5/ Hex

REF: AANEPH5025L
 LOT: 231107A1881-01
 SN: 001

2023-11-07

Rx Only

Do not reuse
 Non-sterile
 Caution
 Consult instructions for use
 Do not use if package is damaged

rev.01

10108806388201358
 (11)231107
 (10)231107A1881-01
 (21)001
 (240)AANEPH5025L

15°C
 Temperature limitation

Индивидуальная упаковка изделия имеет бумажную этикетку, содержащую следующие данные:

- Наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- Адрес предприятия-изготовителя;
- Маркировка CE;
- Наименование и/или вариант исполнения изделия;
- Размеры;
- Номер по каталогу;
- Код партии;
- Номер модели;
- Дата изготовления;
- Серийный номер;
- QR-код;
- Символы: «Номер по каталогу», «Код партии», «Дата изготовления», «Серийный номер», «Запрет на повторное применение», «Не стерильно», «Осторожно!», «Обратитесь к инструкции по применению», «Не использовать при повреждении упаковки», «Производитель», «Rx Only»;
- Символ «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе» с указанием наименования и адреса;
- Символ «Температурный диапазон» с указанием верхнего и нижнего пределов условий хранения изделия;
- Номер и дата регистрационного удостоверения.

Макет маркировки на русском языке

CE
2460

Абатмент EZ Post

(EZ Post Abutment) [AR]

Ø5/ C=2/ P=5.5/ Шестигранник

REF AANEPH5025L

2023.11.07

LOT 231107A1881-01

РУМ XXXXXX от АД ММ ПТТ

MOSS AANEPH5025

SN 001

rev.01



Не использовать в воде



Не использовать в огне

Rx Only



Осторожно



Обратитесь к инструкции по применению



Не использовать в огне

(01)08805388201368
(11)231107
(10)231107A1881-01
(21)001
(240)AANEPH5025L

MOSS GmbH Schiffgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gil Daejeon-si
Daejeon-gun Daejeon 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124, г. Москва,
ул. 3-я Рощинская д.18, пом. 10, комн. 7



***Примечание по отдельным видам упаковки:

Трансфер слепочный металлический в количестве 2 штук помещается в пластиковый контейнер-колбу размером 13x43x13 мм. Затем колба и инструкция по применению упаковываются в индивидуальную упаковку в виде пакета из полиэтилена LD размером 100x75 мм.

Маркировка трансфера слепочного металлического:

	Индивидуальная упаковка изделия имеет бумажную этикетку, содержащую следующие данные: - Наименование; - Модель и/или вариант исполнения изделия; - Номер модели; - Дата изготовления; - Назначение; - Название и адрес предприятия-импортера; - Адрес предприятия-изготовителя; - Номер импортируемого изделия; - Состав упаковки; - Номер регистрационного удостоверения предприятия-импортера; - Ссылка на веб-страницу с инструкцией по применению; - Предупреждение: «Запрет на повторное применение»
	Индивидуальная упаковка изделия имеет бумажную этикетку, содержащую следующие данные: - Наименование; - Номер модели; - Название и адрес предприятия-изготовителя; - Номер партии; - Дата изготовления; - QR-код; - Символы: «Номер по каталогу», «Код партии», «Запрет на повторное применение», «Не стерильно», «Обратитесь к инструкции по применению», «Не использовать при повреждении упаковки», «Хранить

Макет маркировки на русском языке

Наименование продукта: Изделие для снятия слепка системы дентальных имплантатов
 Модель: Трансфер слепочный металлический 044CAIN
 Номер: Смотрите описание
 Дата производства: Смотрите описание
 Назначение: Компоненты используются для снятия слепка во время имплантации
 Импортёр: MEGAGEN IMPLANT CO., LTD
 45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup, Dalseong-gun, Тэгу, 42921, Республика Корея
 Производитель: RHEIN 83 S.r.l
 (Италия, Via Elio Zago, 10 40128, Болонья)
 Импортируемый продукт: номер декларации Тэгу, номер получения 13-20
 Количество в упаковке: 1 набор
 Номер регистрации импортера: 1372
 Примечание: домашняя страница (ru.megagen.com) предоставляет инструкцию по применению
 Продукт однократного использования



Трансфер слепочный металлический
 (Stainless Impression Coping)

REF 044CAIN

2022 06 06

LOT P2206000178

Рег. деклар. № 13-20



81700000234840002
 (10) P2206000178
 (11) 1230000

Импортёр: ООО ЦИРМИ, Тэгу, Республика Корея

Сайт: ru.megagen.com

Размеры и материалы упаковки:

Наименование	Размер (Ш*В*Г)	Материал
Пластиковый контейнер-колба	13 мм*43 мм*13 мм	Полиэтилен LD (POLIETILENE LD)
Пакет	100 мм*75мм	Полиэтилен LD (POLIETILENE LD)

18.4 Упаковка и маркировка Абатмента премил, Титанового основания и Титанового основания Тип С

Упаковка премил абатмента, титанового основания и титанового основания Тип С представляет собой блистерную упаковку, рассчитанную на 10 абатментов и 13 винтов. Упаковка для премил абатментов имеет размер 76x15x286 мм, упаковка для титанового основания и титанового основания Тип С имеет размер 63x8x198 мм. Блистерная упаковка помещается в потребительскую картонную коробку размером 78x23x295 мм для премил абатмента, 68x17x205 мм для титанового основания и титанового основания Тип С.

Схема упаковки

Индивидуальная упаковка				
Схема	Символ	Процедура упаковки		
	①	Изделия укладываются в прозрачный пластиковый контейнер		
	②	Производится упаковка контейнера с помощью упаковочного автомата. На бумагу сверху клеится этикетка с названием изделия.		
	③	Режим	Мин	Сред
		Температура	82	99
				Макс
				127

	[°C]			
	Время, [сек]	0,5	1	3
	Давление, [бар]	2,72	2,72	4,1
④	Инструкция по эксплуатации укладывается в коробку вместе с пластиковым контейнером.			
⑤	Этикетка См. Маркировка изделий.			

Размеры и материалы упаковки:

Наименование	Абатмент премил (Ш*В*Д)	Титановое основание, титановое основание Тип С (Ш*В*Д)	Материал
Пластиковый контейнер	76 мм*15 мм*286 мм	63 мм*8 мм*198 мм	Стирол-бутадиеновый сополимер (SBC Poly, K-Resin®)
Герметизирующая бумага	76 мм*286 мм	63 мм*198 мм	Материал Tyvek® CR27 1073B
Коробка	78 мм* 23 мм* 295 мм	68 мм* 17 мм* 205 мм	Картон

- Маркировка Абатмента премил, Титанового основания и Титанового основания Тип С

2460 ZrGen Abutment [AR] Ø4/ C=0,6/ P=4.5 REF AANIPR4015 MTN LOT 230417A0100-01 MODEL AANIPR4015 2023-04-17 SN 029 rev.00 Rx Only Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged MDSS GmbH Schillgraben 41 30175 Hannover Germany MegaGen Implant Co. Ltd 45 Secheon-ro 7gil Daejeon-eup Daejeong-gu Daejeon 42921 Republic of Korea Temperature limitation	Индивидуальная упаковка изделия имеет бумажную этикетку, содержащую следующие данные: - Наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; - Адрес предприятия-изготовителя; - Маркировка CE; - Наименование и/или вариант исполнения изделия; - Размеры; - Номер по каталогу; - Код партии; - Номер модели; - Дата изготовления; - Серийный номер; - QR-код; - Символы: «Номер по каталогу», «Код партии», «Дата изготовления», «Серийный номер», «Запрет на повторное применение», «Не стерильно», «Осторожно!», «Обратитесь к инструкции по применению», «Не использовать при повреждении упаковки», «Производитель», «Rx Only»; - Символ «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе» с указанием наименования и адреса; - Символ «Температурный диапазон» с указанием верхнего и нижнего пределов условий хранения изделия; - Номер и дата регистрационного удостоверения.
--	---

Макет маркировки на русском языке



Титановое основание
(ZrGen Abutment) [AR]
Ø4/ C=0,6/ P=4,5

REF AANIPR4015 MTN

LOT Z30417A0100-01

AANIPR4015

2023-04-17

Ручка XXXXXXX от д.д.м.гг.гг.

SN 029

rev.00



Rx Only



01)00806396244652
[1]Z30417
[10]Z30417A0100-01
[2]1029
[240]AANIPR4015.MTN



MC MSP MEDIZINISCHES Schmelzglaswerk
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co., Ltd.
40, Secheon-ro, Eui-Seong, Gyeonggi-do, 42621
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125134, г. Москва,
ул. Замоскворецкая, д.18, подъезд 1



18.5 Упаковка и маркировка набора Meg-Rhein, матрицы металлической и колпачка ретенционного.

Индивидуальная упаковка набора Meg-Rhein, матрицы металлической, колпачка ретенционного, представляет собой контейнер, состоящий из двух частей: лоток, разделенный на 5 отделений, и крышка лотка. Размер контейнера (лоток + крышка лотка) составляет 61 x 31 x 17 мм. Контейнер помещается в крафт пакет из бумаги и материала PERFECSEAL CR27 1073B с покрытием Тувек®, размером 186x90 мм, который запаивается при помощи упаковочного автомата. Далее пакет помещается в потребительскую картонную коробку, размером 68x20x205 мм, на которую наклеивается этикетка-стикер.

Схема упаковки



Индивидуальная упаковка			
Схема	Символ	Процедура упаковки	
	①	Изделия укладываются в пять отделений лотка.	
	②	Лоток вставляется в внешнюю коробку.	
	③	Собранный контейнер помещается в пакет.	
	④	Производится упаковка с помощью упаковочного автомата	
		Режим	Мин Сред Макс
		Температура [°C]	82 99 127
		Время, [сек]	0,5 1 3
		Давление, [бар]	2,72 2,72 4,1
	⑤	Инструкция по эксплуатации укладывается вместе с контейнером в пакет в картонную коробку. На коробку наклеивается этикетка.	
	⑥	Этикетка См. Маркировка изделий.	

Размеры и материал упаковки:

Наименование	Размер (Ш*В*Д)	Материал
--------------	----------------	----------

Контейнер (лоток+крышка)	61 мм* 17 мм* 31 мм	Стирол-бутадиеновый сополимер (SBC Poly, K-Resin®)
Крафт пакет	186 мм * 90 мм	Материал Tyvek® CR27 1073B Прозрачная пленка (сверху) - PerfecFlex® (OPET/PE/EZ Peel®Sealant)
Коробка	68 мм*20 мм*205 мм	Картон

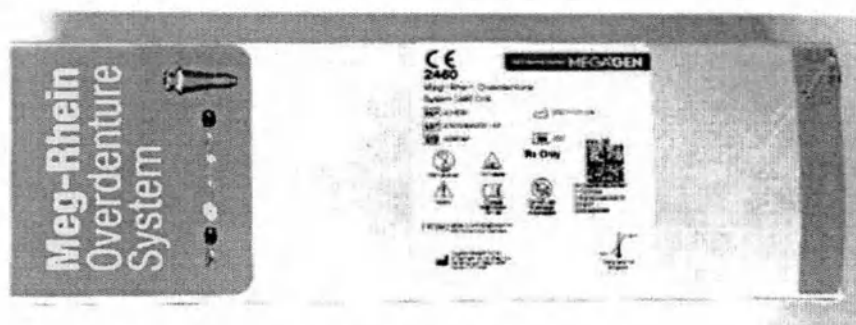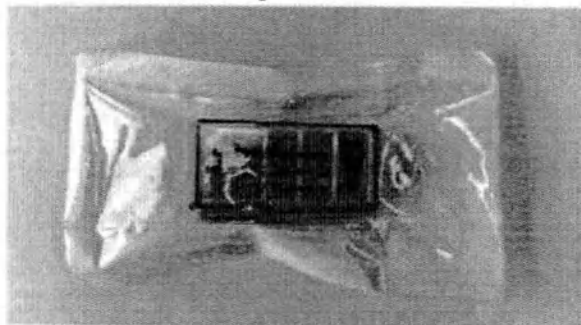- Фото пакета и коробки:



- Маркировка набора Meg-Rhein, матрицы металлической и колпачка ретенционного:

CE 2460
Meg-Rhein Overdenture System [AR] C=6

REF ADR06P **2023-03-24**

LOT 230324A0230-01

MODEL NAME ADR06P **SN** 037 **rev.00**

Do not reuse

Non-sterile

Caution

Consult instructions for use

Rx Only

Do not use if package is damaged

EC REP MOSS GmbH Schellgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co., Ltd
40 Secheon-ro 7gi Daejeon - Rep.
Daejeong-gun Daejeon 42921
Republic of Korea

Temperature limitation
15°C 30°C

Индивидуальная упаковка изделия имеет бумажную этикетку, содержащую следующие данные:

- Наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- Адрес предприятия-изготовителя;
- Маркировка CE;
- Наименование и/или вариант исполнения изделия;
- Размеры;
- Номер по каталогу;
- Код партии;
- Номер модели;
- Дата изготовления;
- Серийный номер;
- QR-код;
- Символы: «Номер по каталогу», «Код партии», «Дата изготовления», «Серийный номер», «Запрет на повторное применение», «Не стерильно», «Осторожно!», «Обратитесь к инструкции по применению», «Не использовать при повреждении упаковки», «Производитель», «Rx Only»;
- Символ «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе» с указанием наименования и адреса;
- Символ «Температурный диапазон» с указанием верхнего и нижнего пределов условий хранения изделия;
- Номер и дата регистрационного удостоверения.

Макет маркировки на русском языке



Набор для съемного протезирования Meg-Rhein
Meg-Rhein Overdenture System [AR]
C=6

REF ADR06P

LOT 230324A0230-01

MODEL NAME ADR06P

2023-03-24

РУН 300000X от дд.мм.гггг

SN 037

rev.00

Rx Only



(01)08806388204984
(11)230324
(10)230324A0230-01
(21)037
(240)ADR06P

BC REP MOSS GmbH Schallgraben 41
30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd.
45 Secheon-ro 7gi Daejeon-si
Daejeon-gun Daejeon 42921
Republic of Korea

ООО Цирми Трейд, 125124 г. Москва
ул. 3-я Рязанская, д.18, пом. 10, комн. 7



18.6 Упаковка и маркировка Инструментов стоматологических (в т.ч. Триммера лунки (AGHTN2, AGHTR2, AGHTW2), Копьевидного сверла (MGD100L, LD1618S, LD1618M, LD2015) и Формирующей фрезы (SD2818S, SD2518M, SD2518S, SD2818M)

- Индивидуальная упаковка инструментов производится в чистой комнате, которая относится к классу 10 000 или меньше. Изделие помещается в прозрачный пластиковый контейнер (блистер) размером 60 на 65 мм, а затем запечатывается в прозрачный пластик с помощью материала PERFECTSEAL CR27 1073B Tyvek®.

Схема упаковки

Индивидуальная упаковка					
Схема	Символ	Процедура упаковки			
④ Этикетка ② Крышка контейнера ③ Изделие и инструкция ① Контейнер	①	Изделие укладывается в прозрачный пластиковый контейнер, в первое отделение			
	②	Инструкция по эксплуатации укладывается в прозрачный пластиковый контейнер, во второе отделение			
	③	Производится упаковка с помощью упаковочного автомата			
		Режим	Мин.	Сред.	Макс.
		Температура, [°C]	82	99	127
Время, [сек]		0,5	1	3	
	Давление, [бар]	2,72	2,72	4,1	
	④	Этикетка См. Маркировка изделий.			

Упаковочная единица: в соответствии с комплектом поставки п.10 данного документа.

Размеры и материал упаковки:


Наименование	Размер (Ш*В*Д)	Материал
--------------	----------------	----------

Пластиковый контейнер	60 мм*65 мм*12 мм	Стирол-бутадиеновый сополимер (SBC Poly, K-Resin®)
Герметизирующая бумага	60 мм*65 мм	Материал Tyvek® CR27 1073B

***Примечание по отдельным видам упаковки:

Индивидуальная упаковка ключа динамометрического состоит из крафт пакета, размером 90х262мм, состоящего из бумаги и материала PERFECSEAL CR27 1073B с покрытием Tyvek®, который запаивается при помощи упаковочного автомата. На пакет наклеивается этикетка, в пакет также помещается инструкция по применению.

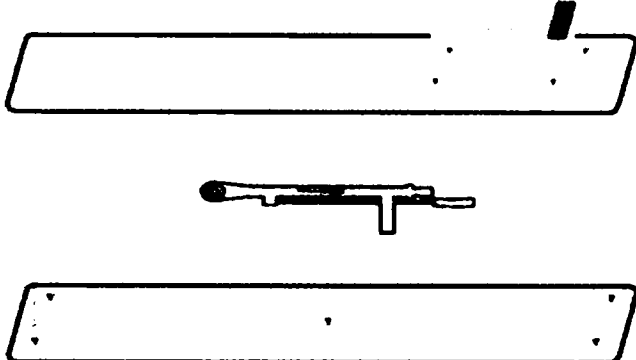Схема упаковки

Индивидуальная упаковка					
Схема	Символ	Процедура упаковки			
	①	Изделие укладывается в пакет в самое крупное отделение.			
	②	Инструкция по эксплуатации укладывается в верхнее отделение пакета.			
	③	Производится упаковка с помощью упаковочного автомата			
		Режим	Мин.	Сред.	Макс.
		Температура, [°C]	82	99	127
		Время, [сек]	0,5	1	3
Давление, [бар]	2,72	2,72	4,1		
	④	Этикетка См. Маркировка изделий.			


Размеры и материал упаковки:

Наименование	Размер (Ш*Д)	Материал
Крафт пакет	90 мм* 262 мм	Материал Tyvek® CR27 1073B Прозрачная пленка (сверху) - PerfecFlex® (OPET/PE/EZ Peel®Sealant)

Индивидуальная упаковка втулки шаблона и триммера лунки (AGHTN3, AGHTR3, AGHTW3), копьевидного сверла (LD1618L, LD2025, LD2030) и формирующей фрезы (SD2518L, SD2818L) имеет форму пакета, размером 80х130 мм, состоящего из полиамида нейлона и алюминия, который запаивается при помощи упаковочного автомата. На пакет наклеивается этикетка, в пакет также помещается инструкция по применению.

Схема упаковки:

Индивидуальная упаковка					
Схема	Символ	Процедура упаковки			
	①	Изделия укладываются в пакет			
	②	Производится упаковка пакета с помощью упаковочного автомата. На бумагу сверху клеится этикетка с названием изделия.			
	③	Режим	Мин	Сред	Макс
		Температура [°C]	82	99	127
		Время, [сек]	0,5	1	3
		Давление, [бар]	2,72	2,72	4,1

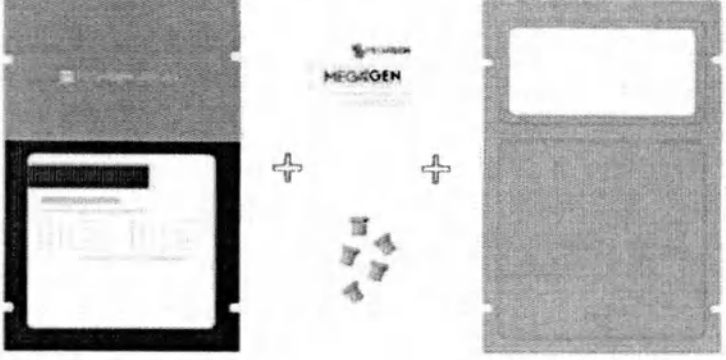	④ Инструкция по эксплуатации укладывается в коробку вместе с пластик овим контейнером.
	⑤ Этикетка См. Маркировка изделий.

Материалы упаковки

1	Пакет	Полиамид Нейлон-6 (Polyamide Nylon-6) (спереди), Алюминий (Aluminium) (сзади)	DONG-A Package Co, Ltd. Корея	Кратковременный (< 24 часов) контакт с кожей
---	-------	--	-------------------------------	--

- Пример маркировки инструментов стоматологических:

 CE 2460 Lance Drill [CM] Ø2/ L=15/ Long REF MGD100L LOT 231106A2649-01 MODEL MGD100L 2023.11.06 SN 001 rev.09 Rx Only Do not use if package is damaged Temperature limitation	Индивидуальная упаковка изделия имеет бумажную этикетку, содержащую следующие данные: - Наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; - Адрес предприятия-изготовителя; - Маркировка CE; - Наименование и/или вариант исполнения изделия; - Размеры; - Номер по каталогу; - Код партии; - Номер модели; - Дата изготовления; - Серийный номер; - QR-код; - Символы: «Номер по каталогу», «Код партии», «Дата изготовления», «Серийный номер», «Не стерильно», «Осторожно!», «Обратитесь к инструкции по применению», «Не использовать при повреждении упаковки», «Производитель», «Rx Only»; - Символ «Уполномоченный представитель в Европейском сообществе» с указанием наименования и адреса; - Символ «Температурный диапазон» с указанием верхнего и нижнего пределов условий хранения изделия; - Номер и дата регистрационного удостоверения.
--	---

Макет маркировки на русском языке

CE
2460

Сверло копьевидное (Lance Drill) [CM]
Ø2/ L=15/ Long

REF MGD100L

LOT 231106A2649-01

MODEL MGD100L

2023-11-06

РУ/М XXXXXX от ДД ММ ГГГГ

SN 001

rev.09

Rx Only



Осторожно



Read manual



Do not use for other purposes



Do not use for other purposes



(01)08806388226214
(11)231106
(10)231106A2649-01
(21)001
(240)MGD100L

EC REP MOSS GmbH Schillgraben 41

30175 Hannover Germany

MegaGen Implant Co. Ltd
45 Secheon-ro 7gil Daseo-eup
Dalseong-gun Daegu 42921
Republic of Korea

ООО Имплант Трейд, 125124 г. Москва, ул.
3-я Садовая-Коптевская, д. 18, пом. II, ком. 7



15°C
Температурный датчик

Отвертка для установки ретенционного колпачка упаковывается в индивидуальную упаковку в виде пакета из полиэтилена LD размером 100x95 мм.

Маркировка отвертки для установки ретенционного колпачка:

Product name: Dental Implant Surgical Instrument
Model: Retentive Cap Insertion Tool DB51AC
Number: Refer to the description
Date of manufacture: Refer to the description
Purpose of use:
Instrument used during the dental implantation procedure
Importer: MEGAGEN IMPLANT CO., LTD
45 Secheon-ro 7gil Daseo-eup, Dalseong-gun, Daegu, 42921,
Republic of Korea
Manufacturer: RHEIN 83 S.r.l.
(Italy, Via Emilio Zago, 10 40126, Bologna)
Imported item: declaration number Daegu, reception number 13-09
Packaging unit: 1 SET
Importer business license: No 1372
Attachment: home page (du.megagen.com) which provide
electronic form
Medical device / Reusable

Индивидуальная упаковка изделия имеет бумажную этикетку, содержащую следующие данные:

- Наименование;
- Модель и/или вариант исполнения изделия;
- Номер модели;
- Дата изготовления;
- Назначение;
- Название и адрес предприятия-импортера;
- Название и адрес предприятия-изготовителя;
- Номер импортируемого изделия;
- Состав упаковки;
- Номер регистрационного удостоверения предприятия-импортера;
- Ссылка на веб-страницу с инструкцией по применению;
- Медицинское изделие, Можно использовать повторно

RHEIN 83 S.r.l. CE
Via Zago 10 MARC - 40126 BOLOGNA - ITALY
INSERITORE & CAPPETTE
NORMO & MICRO
REF DB51AC
LOT P2210002276
(01)08806388226214
(10)P2210002276
(11)221020

Индивидуальная упаковка изделия имеет бумажную этикетку, содержащую следующие данные:

- Название и адрес предприятия-изготовителя;
- Наименование;
- Маркировка CE;
- Номер модели;
- Код партии;
- Дата изготовления;
- QR-код;

- Символы: «Rx Only» «Номер по каталогу», «Код партии», «Не стерильно», «Обратитесь к инструкции по применению», «Не использовать при повреждении упаковки».

Макет маркировки на русском языке

Наименование продукта: Хирургический инструмент для дентальной имплантации
 Модель: Отвертка для установки ретенционного колпачка 0851AC
 Номер: Смотрите описание
 Дата производства: Смотрите описание
 Назначение: Инструмент используется во время процедуры дентальной имплантации
 Импортёр: MEGAGEN IMPLANT CO., LTD
 45 Secheon-ro 7gil Dasa-eup, Dalseong-gun, Тэгу, 42921, Республика Корея
 Производитель: RHEIN 83 S.r.l
 (Италия, Via Elio Zago, 10 40128, Болонья)
 Импортируемый продукт: номер декларации Тэгу, номер получения 13-19
 Количество в упаковке: 1 набор
 Номер регистрации импортера: 1372
 Примечание: домашняя страница (<http://ru.megagen.com>) предоставляет инструкцию по применению
 Медицинское изделие / Изделие многократного использования



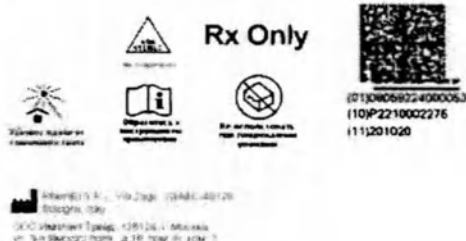
Отвертка для установки ретенционного колпачка
 (Retentive Cap Insertion Tool)

REF 0851EC

2022 10 20

LOT P2210002276

RUIN XXXXXXX от даты отгрузки




Размеры и материалы упаковки:

Наименование	Размер (Ш*В*Д)	Материал
Пакет	100 мм*95 мм	Полиэтилен LD (POLIETILENE LD)


18.7 Транспортная упаковка и маркировка изделия

Имплантаты в потребительской упаковке укладываются в транспортную упаковку по 50 штук. Ортопедические компоненты, формователь десны, титановое основание, наборы и инструменты, в потребительской упаковке укладываются в транспортную упаковку по 100 шт.

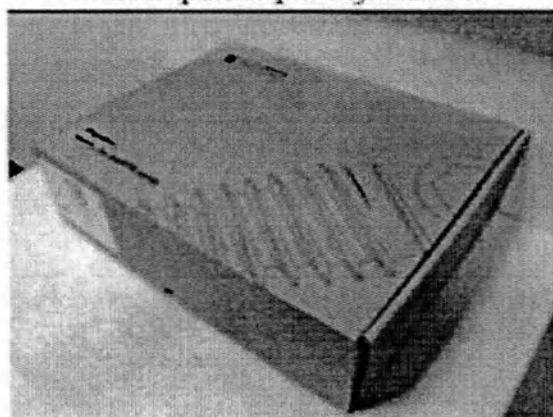Малая транспортная упаковка




Финальная транспортная упаковка

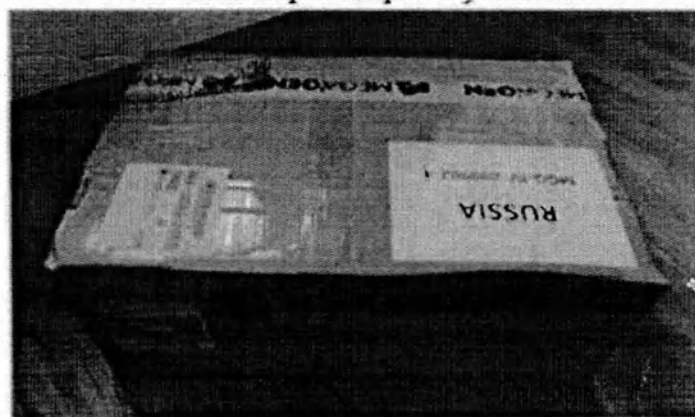


Материалы и размеры транспортной упаковки соответствуют таблице:

Наименование	Размер, см ($\pm 10\%$)	Материал
Малая транспортная упаковка	32,5 * 25,2 * 8,8	Картон
Финальная транспортная упаковка	54 * 36 * 31	Картон

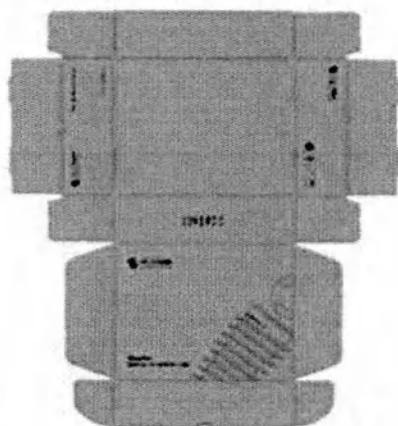- Маркировка малой транспортной упаковки



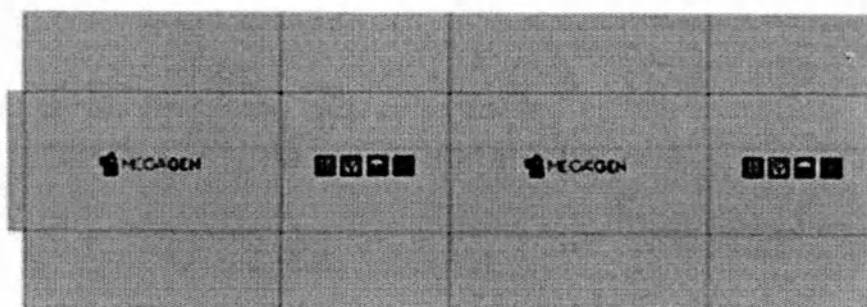- Маркировка финальной транспортной упаковки



На упаковку нанесена следующая информация:

- наименование, товарный знак и интернет-сайт компании-изготовителя;
- надписи маркетингового характера;
- символы «Бережное обращение», «Знак вторичной переработки в виде Петли Мёбиуса», «Верх», «Хрупкое. Осторожно».

На упаковку нанесена следующая информация:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- символы «Верх», «Бережное обращение», «Беречь от влаги», «Запрещение применения крюков при поднятии груза»

- Значение символов

Символ	Обозначение	Символ	Обозначение
	Номер по каталогу		Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Код партии		Обратитесь к инструкции по применению
	Дата изготовления		Не использовать при повреждении упаковки
	Серийный номер		Температурный диапазон
	Запрет на повторное применение		Производитель
	Радиационная стерилизация		Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Не стерильно		Не допускать воздействия солнечного света
CE	Соответствие директивам ЕС	Model name	Номер модели
Rx Only	Данный продукт может быть отпущен аптекой только по рецепту, на территории США.		Использовать до

	Верх		Хрупкое. Осторожно
	Бережное обращение		Запрещение применения крюков при поднятии груза
	Беречь от влаги		Знак вторичной переработки в виде Петли Мёбиуса
	Не стерилизовать повторно		

19. Требования к техническому обслуживанию и ремонту

Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

Уход за полостью рта с имплантируемыми изделиями осуществляется самим пациентом по рекомендациям врача-стоматолога. Профилактический осмотр – не реже 1 раза в полгода.

20. Методы испытаний и контроля

Контроль качества изделий производится в соответствии с государственными стандартами страны производителя.

21. Перечень оборудования и средств измерений, необходимый для осуществления контроля качества медицинского изделия

Перечень оборудования и средств измерений, необходимый для осуществления контроля качества медицинского изделия определяется требованиями и стандартами страны-производителя.

22. Условия эксплуатации и транспортирования изделия

Изделие должно эксплуатироваться в сухом чистом помещении при комнатной температуре от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+22^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{C}$), уровне относительной влажности в помещении не более 80% и атмосферном давлении 500 - 1060 гПа.

Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующих для транспорта каждого вида. При транспортировке должна быть обеспечена защита изделия от влажности и неожиданных перемещений. При транспортировке и хранении рекомендуется сохранять изделие в оригинальной упаковке производителя. При транспортировании изделие должно быть устойчиво к воздействию климатических факторов. Транспортировать изделие, рекомендуется при температурном режиме от 1°C до 30°C ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) при относительной влажности воздуха не более 80% и атмосферном давлении 500 - 1060 гПа, без конденсации, без механических воздействий при вибрационных нагрузках в диапазоне частот от 10 до 55 Гц.

23. Условия хранения изделия

При хранении изделие должно быть устойчиво к воздействию климатических факторов при температурном режиме: от $+15$ до $+22$ (± 2) $^{\circ}\text{C}$, при относительной влажности воздуха не более 80% и атмосферном давлении 500 - 1060 гПа. Хранение стерильных изделий зависит от типа используемой упаковки для финишной стерилизации, в соответствии с рекомендациями изготовителя упаковки. Хранение стерилизованных потребителем изделий осуществляется в стерилизационных пакетах в чистом, сухом, обеспыленном помещении при температуре от $+15$

до +30 (±2) °C, при относительной влажности воздуха не более 80% и атмосферном давлении 500 - 1060 гПа, избегая воздействия прямых солнечных лучей и влаги.

24. Срок годности изделия

Нестерильные изделия из металла (титан, нержавеющая сталь) имеют срок годности в заводской упаковке - 10 лет (120 месяцев).

Стерильные изделия (имплантат и винт-заглушка, мембрана i-Gen, винт-заглушка i-Gen, винт i-Gen, винт S.H.A, формирователь десны и формирователь десны сканируемый), а также изделия из пластика или резины - 5 лет (60 месяцев).

25. Утилизация или уничтожение медицинского изделия

Утилизация медицинского изделия, осуществляется в соответствии с действующим законодательством, согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Изделие относится к медицинским отходам класса В по СанПиН 2.1.3684-21.

Изделие, по истечению срока эксплуатации, истечения срока годности, а также в случае повреждения упаковки и невозможности использования изделий по назначению подлежит уничтожению местными публично-правовыми организациями, в соответствии с требованиями местных организаций и правилами утилизации в данном регионе.

Перед утилизацией использованных изделий необходима дезинфекция изделий.

26. Гарантийные обязательства производителя

Гарантийный срок эксплуатации изделий, соответствует сроку годности изделия, указанному в п 24 настоящего документа. Производитель гарантирует соответствие изделия установленным стандартам при соблюдении условий транспортирования, хранения и применения.

27. Сведения о компании принимающей рекламации потребителей изделия

На территории Российской Федерации претензии и обращения потребителей, связанные с гарантийными обязательствами производителя, принимаются по адресу: Россия, 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д.18, пом. III, ком.7, ООО «Имплант Трейд» (уполномоченный представитель производителя). Тел: +7 912 791 00 02, terentyev@mdgp.ru.

В случае возникновения дефектов изделия в период действия гарантийных обязательств, а также при первичной приемке, владелец изделия должен направить рекламации в адрес организации-продавца - заявку на замену в соответствии с формой №1.

Форма №1.

Адрес, по которому должен прибыть представитель компании, осуществляющей гарантийные обязательства, номер телефона;		
Дата	Краткое содержание дефекта	Дата, направления рекламации

등부 2024 년 제 3012 호

Registered No. 2024 — 3012

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 선 언 서 에
기재된(주) 메가젠임플란트 대표이사 박광범
의 대리인 남 승 혁 (는)은
본 공증인의 면전에서 위 본인이
기명날인 한 것임을 자인하였다.

Nam Seung Hyuk
attorney-in-fact of
MegaGen Implant Co., Ltd.
President: Kwang Bum Park

appeared before me and
admitted said principal's
subscription to the attached

2024 년 7 월 25 일

Declaration

이 사무소에서 위 인증한다.

This is hereby attested on
this 25th day of July, 2024
at this office

공증인가 평화합동법률사무소
소속 서울중앙지방검찰청
서울특별시 중구 을지로 80-1

PYEONG-HWA LAW AND NOTARY PUBLIC OFFICE
Belong to Seoul Central District Prosecutors' Office
80-1, Eulji-Ro, Jung-Gu, Seoul, Korea

공증담당
변 호 사



Park Sun Ok
Attorney-at-Law Park Sun Ok

This office has been authorized
by the Minister of Justice, the
Republic of Korea, to act as
Notary Public since
September 8, 1971. under
Law No. 2254

공증인가 평화합동법률사무소

210mm 297mm
(보존용지 (1종) 70g/㎡)

Регистрационный №: 2024 - 3012

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНТОРА ПХЁНХВА
ЫЛЬЧЖИРО 80-1, ЧАНГ-ГУ, СЕУЛ, КОРЕЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНТОРА ПХЁНХВА Тел. (02) 776-5371-7680 Факс. (02)776-7682

Декларация

От имени МегаДжен Имплант Ко., Лтд (MegaGen Implant Co., Ltd) настоящим официально и достоверно заявляем, что:

1. Прилагаемый(-е) документ(-ы):

Эксплуатационная документация

2. ☒ является(-ются) подлинным(-и) и точным(-и).

3. ☐ является верным переводом текста, первоначально написанного на корейском языке, соответствует действительности и является точным.

Производитель: МегаДжен Имплант Ко., Лтд

Имя: Кванг-Бум Пак

Должность: Президент

Подпись уполномоченного лица: /Круглая печать/

/Штамп/: МегаДжен Имплант Ко., Лтд.

/Подпись/

КВАНГ БУМ ПАК / ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ

Дата: 23 июля 2024 г.

Регистрационный №: 2024-3012

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Нам Сын Хёк, доверенное лицо МегаДжен Имплант Ко., Лтд. (MEGAGEN IMPLANT Co., Ltd.),

Президента: Кванг Бум Парк ,

Предстал (а) передо мной и подтвердил (а), что упомянутый принципал подписал прикрепленную
ДЕКЛАРАЦИЮ.

Настоящее подтверждается сегодня, 25 июля 2024 г. в данной конторе.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНТОРА
ПХЁНХВА** Относится к Прокуратуре Центрального района Сеула

Ыльчиро 80-1, Чанг-гу, Сеул, Корея

/Подпись/

Поверенный Ли Сун Хи

Настоящий офис получил полномочия от Министерства Юстиций Республики Корея на действие в
качестве публичного нотариуса с 8 сентября 1971 г. в соответствии с законом № 2254.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНТОРА ПХЁНХВА

210 мм X 297 мм

Бумага 1 типа 70 гр/м²

Город Москва.

Двадцать второе августа две тысячи двадцать четвертого года.

Я, переводчик Балужева Светлана Олеговна, свидетельствую идентичность данного текста, переведенного с английского языка на русский язык.

Переводчик

Балужева С.О.

**Российская Федерация
Город Москва**

Двадцать второе августа две тысячи двадцать четвертого года

Я, Иванова Венера Джоновна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Балужевой Светланы Олеговны.

Подпись сделана в моём присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/205-н/77-2024-

2-1636

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



В. Д. Иванова



Всего прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью 185
лист (-а/-ов)
Нотариус