

Фотографические изображения

«Набор реагентов вспомогательных гемолизирующих для количественного определения фолата в эритроцитах иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Folate RBC Hemolyzing Reagent Elecsys and cobas e analyzers)»

Дополнительно реактивов вспомогательных гемолизирующих для количественного определения фолата в эритроцитах иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Folate RBC Hemolyzing Reagent Elecsys and cobas e analyzers)

Folate RBC Hemolyzing Reagent

Elecsys and cobas e analyzers

REF 05944317190



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics Indianapolis, IN
Made in Germany


06444881001(1)

CONTENT

→ 4 x 200 mL

IVD CE

2-8 °C

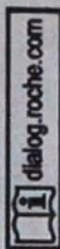

dialog.roche.com



COBAS, COBAS E and ELECSYS are trademarks of Roche.

cobas®

03



Дополнительно реактивов вспомогательных гемолизирующих для количественного определения фолата в эритроцитах
иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Folate RBC
Hemolyzing Reagent Elecsys and cobas e analyzers)

Folate RBC Hemolyzing Reagent

REF (240)05944317190

GTIN (01)0401583000453

LOT

Note: This build corresponds to the ascorbic acid lot ending on -99
contained in the kit.

Hinweise: Die Packungsscharge entspricht der enthaltenen

Teilliefercharge (Ascorbinsäure-Päckchen) mit Endung -99.

Note: le numéro de lot est celui de l'article auxiliaire (sachet
d'acide ascorbique) auquel on a ajouté les chiffres -99.

Nota: El lote del estuche corresponde al lote de los componentes
incluidos (bolsitas de ácido ascórbico) que termina en -99.


Nota: Il lotto della confezione corrisponde al lotto dei componenti
contenuti (bustine di acido ascorbico), che termina in -99.

Nota: Os dispositivos deste lote utilizam-se com os artigos de
complemento necessários cujo lote finaliza com o número -99.



001

сбор реагентов вспомогательных гемолизирующих для количественного определения фолата в эритроцитах иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Folate RBC Hemolyzing Reagent Elecsys and cobas e analyzers)

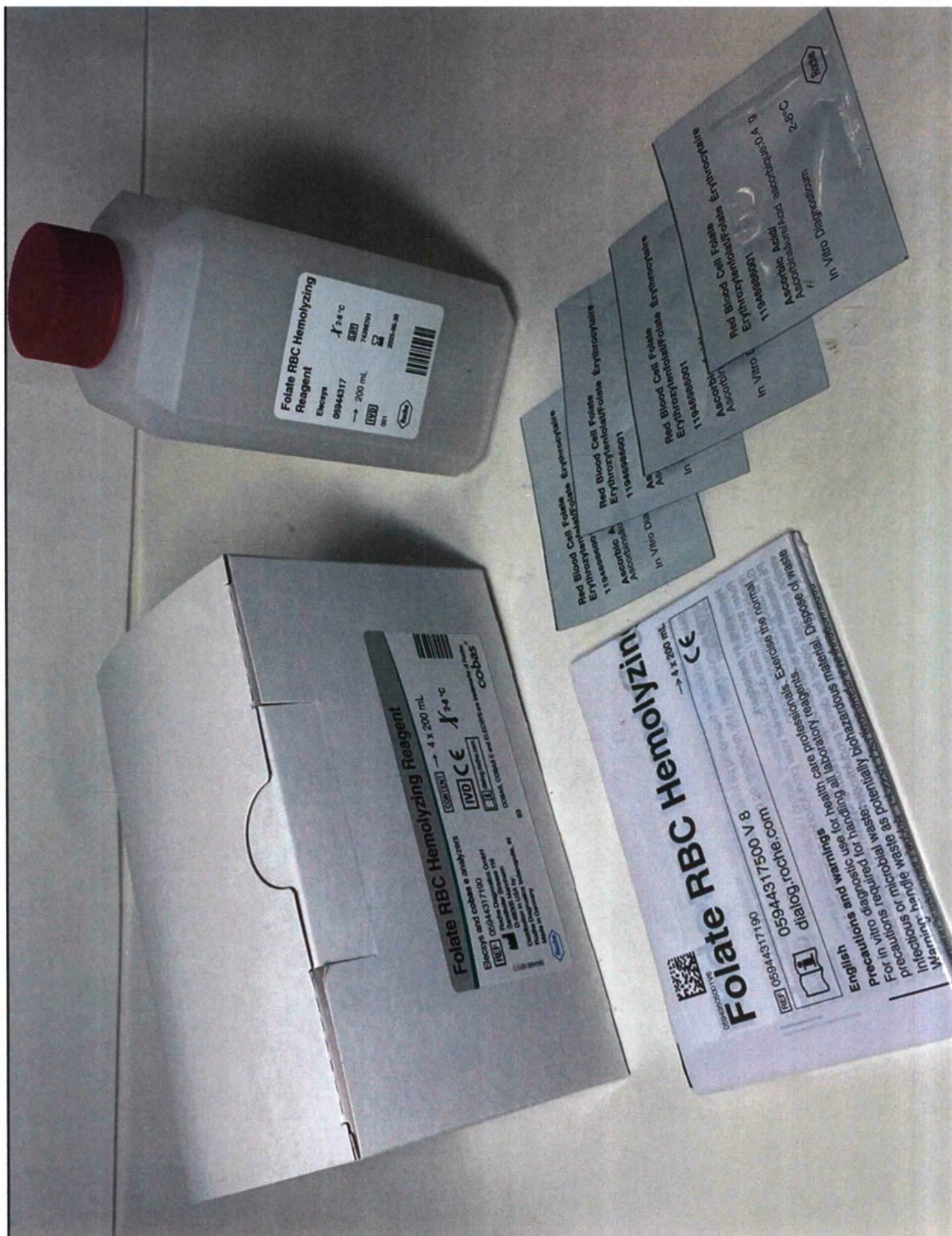

набор реагентов вспомогательных гемолизирующих для количественного определения фолата в эритроцитах
иммуохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Folate RBC
Hemolyzing Reagent Elecsys and cobas e analyzers)

Реагент вспомогательный гемолизирующий для количественного определения фолата в эритроцитах иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Red Blood Cell Folate) в саше-пакете – 4 шт.;

Red Blood Cell Folate
Erythrozytenfolat/Folate Érythrocytaire

11946986001

Ascorbic Acid/
Ascorbinsäure/Acid ascorbique:0.4 g

In Vitro Diagnosticum 2-8°C




Red Blood Cell Folate
Erythrozytenfolat/Folate Érythrocytaire

11946986001

Ascorbic Acid/
Ascorbinsäure/Acid ascorbique:0.4 g

In Vitro Diagnosticum 2-8°C

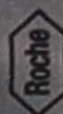


Red Blood Cell Folate
Erythrozytenfolat/Folate Érythrocytaire

11946986001

Ascorbic Acid/
Ascorbinsäure/Acid ascorbique:0.4 g

In Vitro Diagnosticum 2-8°C

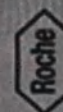


Red Blood Cell Folate
Erythrozytenfolat/Folate Érythrocytaire


11946986001

Ascorbic Acid/
Ascorbinsäure/Acid ascorbique:0.4 g

In Vitro Diagnosticum 2-8°C

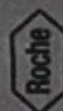

Флакон пустой – 1 шт.;

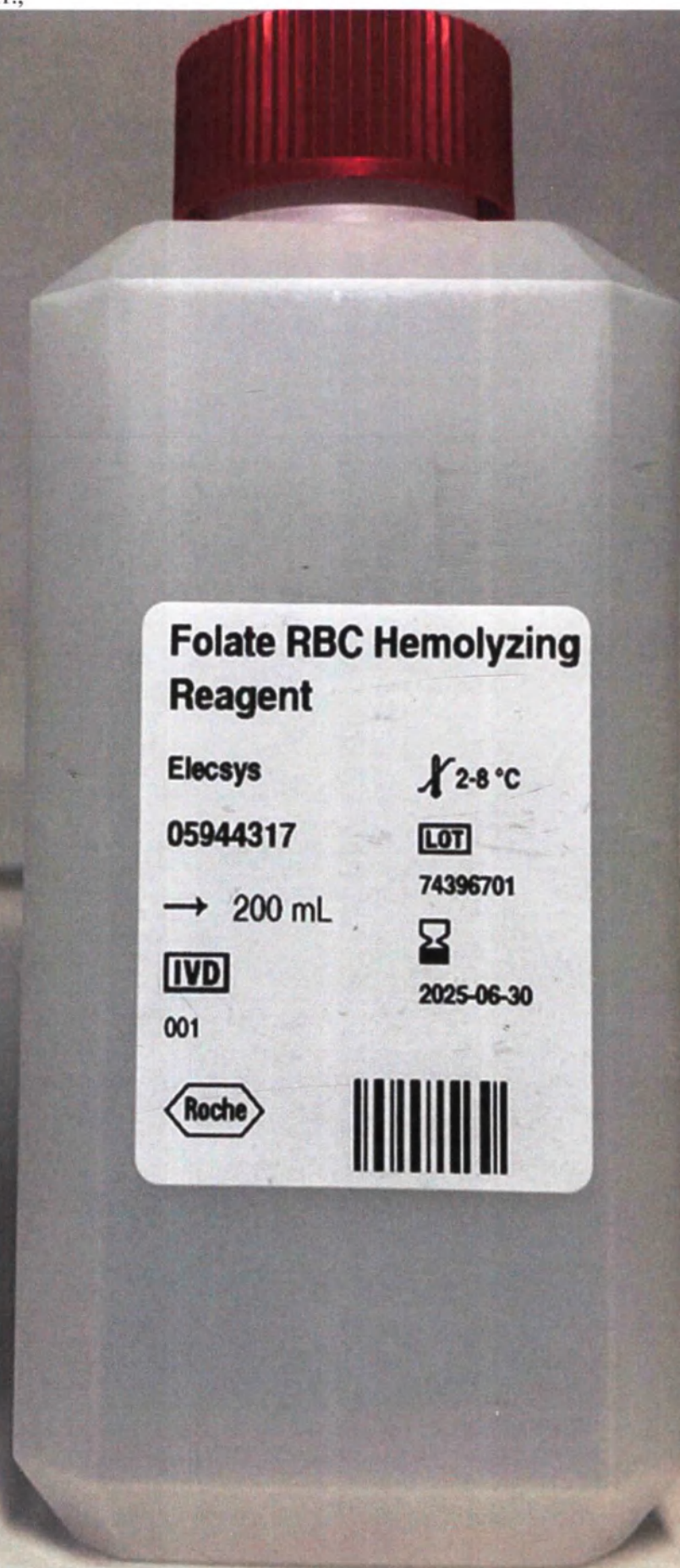



05944317190

Folate RBC Hemolyzing Reagent cobas®

→ 4 x 200 mL

REF 05944317190

05944317500 V 8

dialog.roche.com



CE

English

Precautions and warnings

For in vitro diagnostic use for health care professionals. Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents.

Infectious or microbial waste:
Warning: Handle waste as potentially biohazardous material. Dispose of waste according to accepted laboratory institutions and procedures.

Environmental hazards

Apply all relevant local disposal regulations to determine the safe disposal. Safety data sheet available for professional user on request.

Avoid foam formation in all reagents and sample types (specimens, calibrators and controls).

Method Sheet download

The box at the top of this document shows the product code together with the respective document version.

Please go to dialog.roche.com to download this document. The website displays either the version listed here or, if available, any later version that is also valid for this product code. If you have no internet access, please contact your local Roche affiliate to obtain the document free of charge.

Deutsch

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

Zur Verwendung als In-vitro-Diagnostikum durch medizinisches Fachpersonal. Die beim Umgang mit Laborreagenzien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten.

Infektions- oder mikrobieller Abfall:

Warnung: Abfall als potenziell biologisch-gefährliches Material behandeln. Abfall im Einklang mit anerkannten Laboranweisungen und -verfahren entsorgen.

Umweltgefahren:

Zur Festlegung einer sicheren Entsorgung alle einschlägigen lokalen Entsorgungsvorschriften beachten.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich. Schulung bei allen Reagenzien und Probenarten (Proben, Kalibratoren und Kontrollen) vermeiden.

Download von Methodenblättern

Der eingetragte Text am Beginn des Dokumentes zeigt den Produkt-Code sowie die dazugehörige Version des Dokumentes.

Dieses Dokument kann von der folgenden Webseite heruntergeladen werden: dialog.roche.com.

Die Webseite zeigt die hier referenzierte Version oder aber, falls bereits verfügbar, eine ebenfalls für diesen Produkt-Code gültige höhere Version. Sollten Sie keinen Internetzugang haben, erhalten Sie bei Ihrer Roche-Vertretung das Dokument kostenlos.

Français

Précautions d'emploi et mises en garde

Pour diagnostic in vitro, usage réservé aux professionnels de santé. Observer les précautions habituelles de manipulation en laboratoire.

Déchets infectieux ou microbiens :

Mise en garde : Manipuler les déchets comme des matériaux potentiellement infectieux. Éliminer les déchets conformément aux instructions et aux procédures du laboratoire.

Risques environnementaux :

Suivre toutes les réglementations locales en vigueur pour une élimination en toute sécurité.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Éviter la formation de mousse dans les réactifs et les échantillons de tous types (échantillons de patients, calibrateurs et contrôles).

Téléchargement de fiches techniques

Le cadre en haut de la page montre le code du produit et la version du document.

Ce document est téléchargeable sur dialog.roche.com.

Le site affiche la version indiquée ci-dessus ou toute autre version ultérieure disponible correspondant au code du produit. Si vous n'avez pas accès à Internet, veuillez contacter le représentant Roche de votre pays pour obtenir ce document gratuitement.

Español

Medidas de precaución y advertencias

Para el uso diagnóstico in vitro por los profesionales de la salud. Observar las medidas de precaución usuales para la manipulación de reactivos de laboratorio.

Residuos infecciosos o microbiológicos:

Advertencia: manipule los residuos como material biológico potencialmente peligroso. Deseche los residuos de acuerdo con las instrucciones y procedimientos de laboratorio aceptados.

Peligros ambientales:

Aplique todas las normas locales de eliminación pertinentes para asegurar una eliminación segura.

Existe una ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Evite la formación de espuma en reactivos y muestras de todo tipo (especímenes, calibradores y controles).

Descargar la metodología

El recuadro en la parte superior de la página indica el código del producto junto con la versión del documento.

El documento puede descargarse a través de dialog.roche.com.

La página web muestra la versión aquí indicada o, en su caso, una versión posterior que corresponde al código del producto. Si no tiene acceso a Internet, contacte con su representante de Roche para recibir un documento gratuito.

Italiano

Precauzioni e avvertenze

Per uso diagnostico in vitro per i professionisti del settore sanitario. Osservare le precauzioni normalmente adottate durante la manipolazione dei reagenti di laboratorio.

Rifiuti infettivi e microbiologici

Avvertenza: trattare i rifiuti come materiale a potenziale rischio biologico. Smaltire i rifiuti a seconda delle istruzioni e procedure di laboratorio riconosciute.

Rischi ambientali

Per garantire uno smaltimento sicuro, applicare tutte le normative locali inerenti in materia di rifiuti.

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Evitare la formazione di schiuma in tutti i reattivi e tipi di campione (campioni, calibratori e controlli).

Scaricamento della metodica

Nel box riportato all'inizio di questo documento è indicato il codice prodotto insieme alla versione della rispettiva metodica.

Per scaricare la metodica, andare a dialog.roche.com.

La pagina web mostra la versione indicata o, in caso contrario, una versione successiva che corrisponde al codice prodotto. Se non ha accesso a Internet, rivolgersi al rappresentante locale di Roche per ottenere il documento gratuitamente.

Português


Avisos e precauções

Para utilização em diagnóstico in vitro restrita a profissionais de saúde. Respeite as precauções normais de manuseamento de reagentes laboratoriais.

Resíduos infecciosos ou microbiológicos

Aviso: Manuseie os resíduos como material de potencial risco biológico. Examine os resíduos de acordo com as instruções e os procedimentos laboratoriais aceitos.

2022-03, V 6

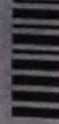

cobas e analytix

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
9 листа (ов)



Косинов А.С.

по доверенности
от 30.01.2023 г.