

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Грзан Групп»

Панюков Ю.В.

2024 г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный ACCRE 90 для
диагностики in vitro**

Макет русскоязычной маркировки

Наименование изделия	Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный ACCRE 90 для диагностики in vitro
Изготовитель	Shenzhen Tisenc Medical Devices Co., Ltd. 11F, 11G, Kechuang Building, Quanzhi Science and Innovation Park, Maozhoushan Industrial Park, Shajing Community, BaoAn District, Shenzhen, 518104, P.R.China. Телефон: +86-400-830-8768, +86-0755-23225549 E-mail: sales@tisenc.com
Место производства	Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. 501 Room, 5F Self-edited Building 1, No.8 Lianhuayan Road, Huangpu District, 510663, Guangzhou, P.R.China
Уполномоченный представитель на территории РФ	Общество с ограниченной ответственностью «ГРЗАН ГРУПП» (ООО «ГРЗАН ГРУПП») 121205, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1 Контактная информация: Телефон: 8 (800) 101-99-73 Почта: grzan@grzan.ru
Регистрационное удостоверение	№ P3H XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный ACCRE 90 для диагностики in vitro

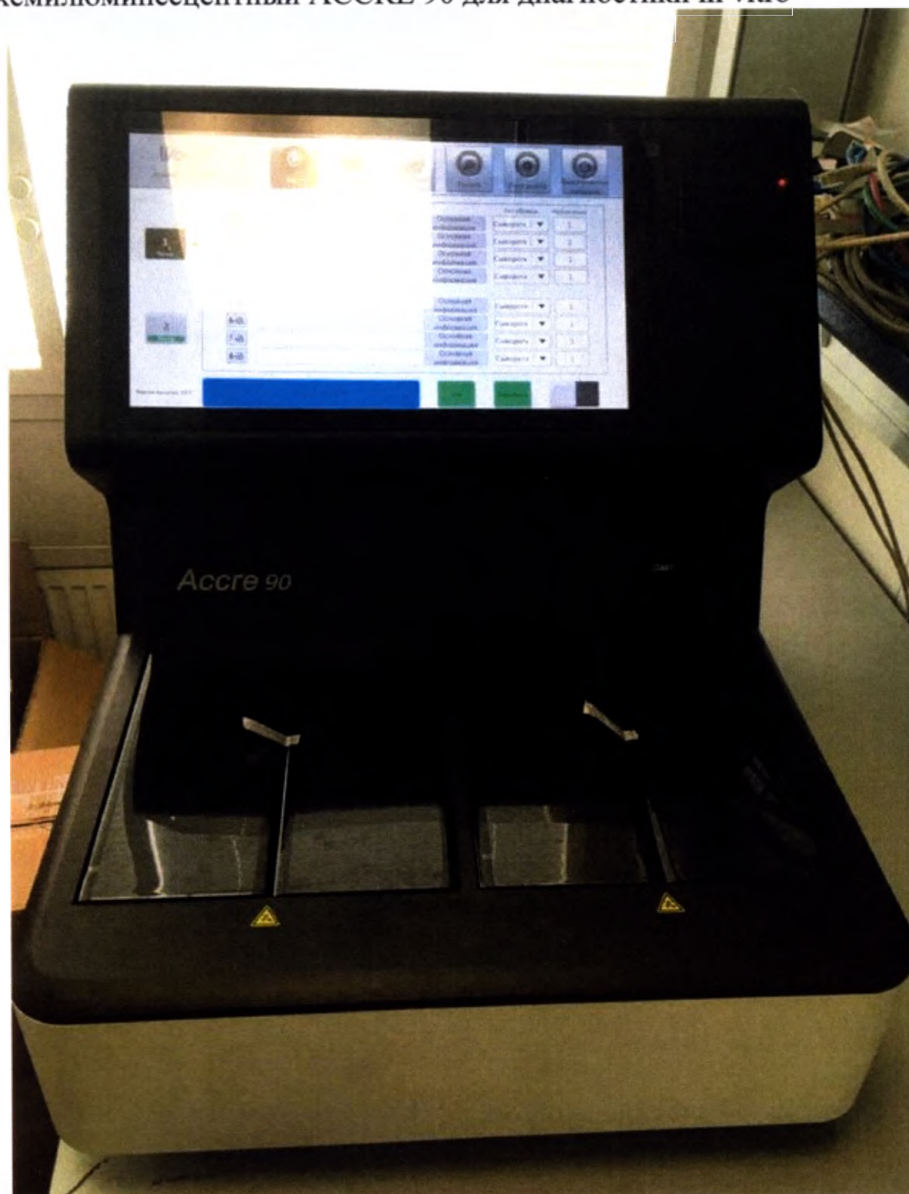

Маркировка, наносимая на корпус анализатора автоматического иммунохемилюминесцентного ACCRE 90 для диагностики in vitro

Vondfo

Automatic Chemiluminescence Immunoassay Analyzer

ACCRE 90 Power: AC100-240V~, 50/60Hz, 300VA

SN TS2J3407224 REF F01N UDI

2024-04 2034-04

(01) 0 6971824 20026 3
(11) 240426
(17) 340425
(10) 2024040013
(21) TS2J407224

Shenzhen Tisenc Medical Devices Co., Ltd.
11F, 11G, Kechuang Building, Quanzhi Science and Innovation Park,
Maozhoushan Industrial Park, Shajing Community, BaoAn District,
Shenzhen, 518104, P.R.China


IVD

!  

Штатив для реагентов




Контейнер для использованных наконечников

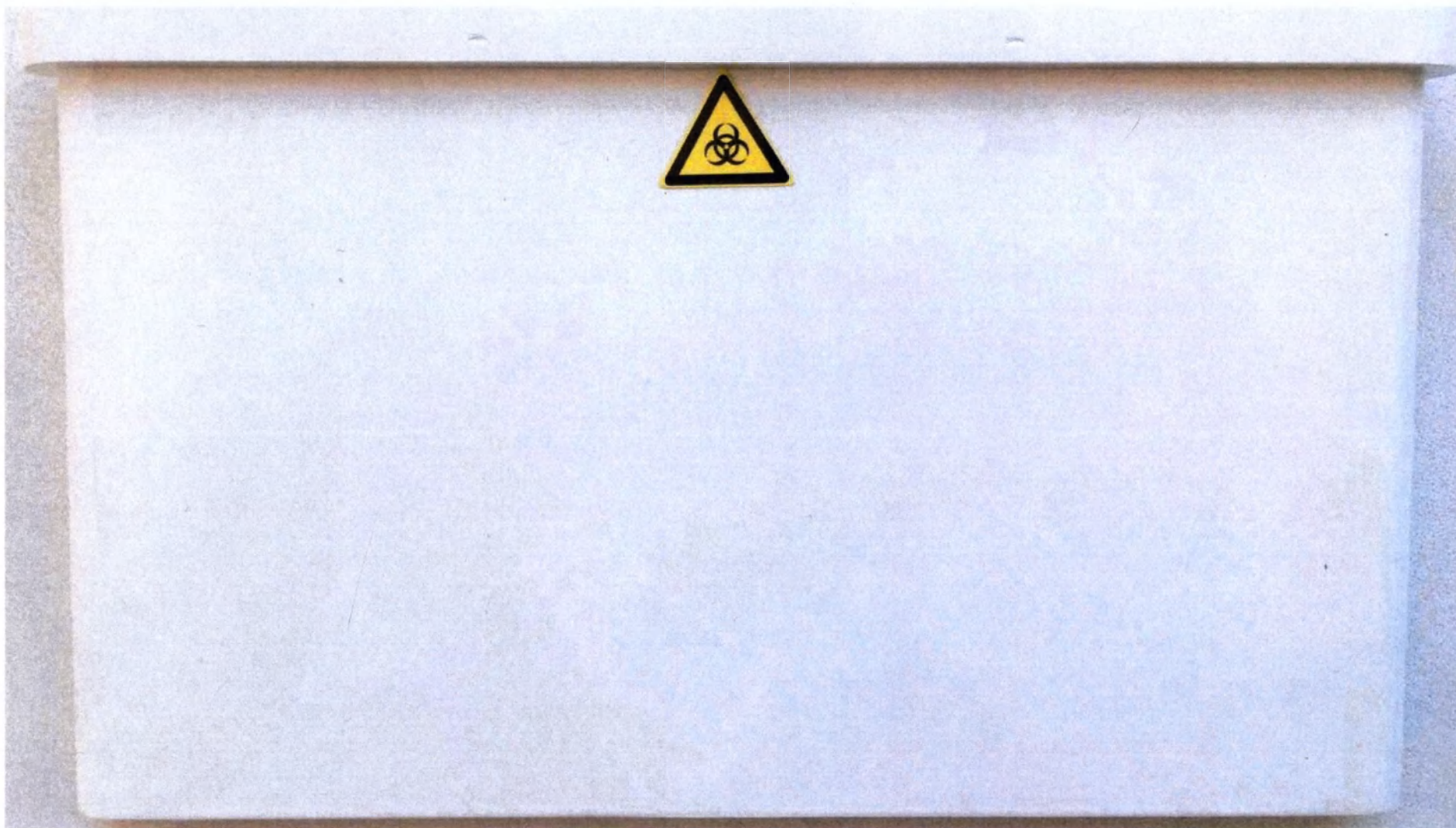

Бумага для термопринтера



Кабель питания

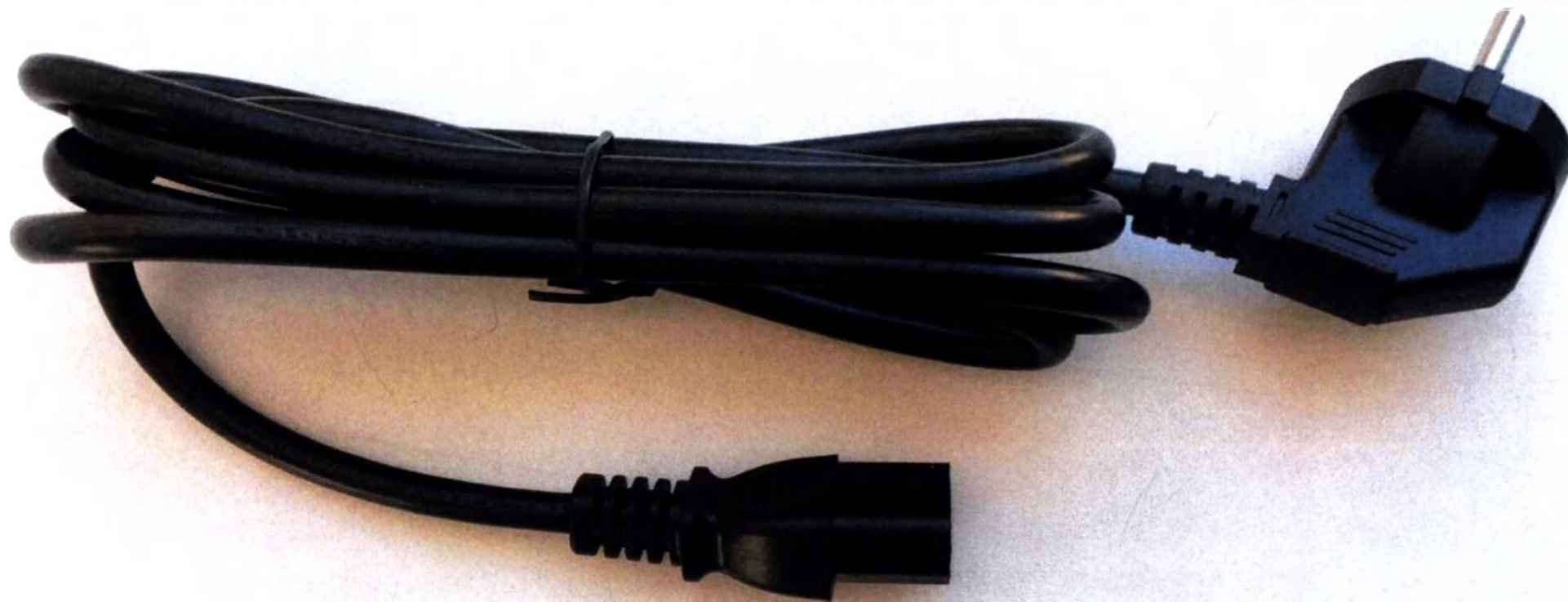

Кабель Com-Port



Сканер штрих-кода



Wondfo

Automatic Chemiluminescence
Immunoassay Analyzer


User Manual

 Customer Hotline
+86 0755 23225549
<http://www.tisenc.com>



Shenzhen Tisenc Medical Devices Co., Ltd.

Гарантийный талон

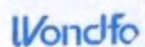

Instrument Warranty Card

Immunoassay System

General Information

Product Name	
Model	
Serial Number	
Address	
Of installation	
Service Engineer	

Please Note that the service engineer responsible for installation should fill above information

Service/ Maintenance Record

Date	Service Type	Information & Note	Engineer
	☐ Repair ☐ Maintenance		
	☐ Repair ☐ Maintenance		
	☐ Repair ☐ Maintenance		
	☐ Repair ☐ Maintenance		
	☐ Repair ☐ Maintenance		

Shenzhen Tisenc Medical Devices Co., Ltd.

E-mail: tisenc@tisenc.com

<http://www.tisenc.com>

Tel: +86-0755-23225549

Address: 11F, 11G, Keckuang Building, Qianzhi Science and Innovation Park, Maozhoushan Industrial Park,
Shajing Community, Bao'an District, Shenzhen, 518104, P.R. China

Монтажная ведомость (3 части)

Wondfo

Automatic Chemiluminescence Immunoassay Analyzer Installation Sheet

1.General Information

User Name:			
User Address:			
Contact:		Phone:	
Model:		Serial Number:	
Engineer:		Date:	

2.Installation Check List

Item	Description	Record
1	Repacker the bags complete and no damage	
2	Analyzer Appearance complete and no damage	
3	The Accessories are complete	
4	The transport Return has been returned	
5	Screen of analyzer can light up after connect to power	
6	Touch screen can operate	
7	Incubator can operate and the temperature is in range	
8	USB connection is successfully setup	
9	Setup test procedures are successfully performed	
10	Provide the operation training to User	

3.Client Signature for Conformation

User's Name:	
Date:	
Contact Person:	
Signature:	



Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.

Automatic Chemiluminescence Immunoassay Analyzer

QUICK SOP of ACCRE 90



1. Turn on the **POWER SWITCH** from back of the analyzer, and then press **START** button in the front of instrument to open it.
2. To Log into the software by given **USERNAME** and **PASSWORD**.
3. Open the Reagent Box, put the Reagent Cartridge into the Reagent Rack.
4. Using pipettor manually to load sample into sample hole of Reagent Cartridge.
5. Click  switch icon, open the door of Reagent Chamber.
6. Put the Reagent Rack into the Reagent Chamber of analyzer.
7. Put the Assay Tips into the Reagent Chamber.
8. Enter the sample ID in the software.
 - 8-1 Click on the **TEST** icon.
 - 8-2 Choose one channel.
 - 8-3 Click on **SAMPLE ID** column, type the sample ID, and then click **OK**.
 - 8-4 Repeat 8-2 to 8-3 to load other samples
9. After all samples ID done, click  switch icon, to close the door of Reagent Chamber.
10. Click **START** icon to start test
11. The analyzer running test automatically.

Сертификат качества




Руководство пользователя перед монтажом

Wondfo


ACCRES 90 Pre-operation Guide

After you open the package of ACCRES 90, you must act as following steps first before POWER ON.


- ① To open two Automatic Doors one by one, by hand-holding the adhesive tape of each door.

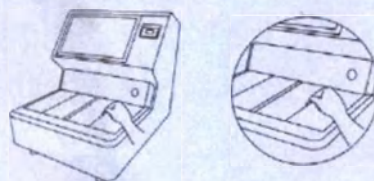


- ② Use the 2.5mm inner hexagon wrench to unscrew the screws on metal plate.

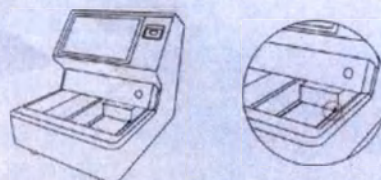

- ③ Turn the TRANSPORT FIXED HANDLE as counterclockwise direction until pull it out.

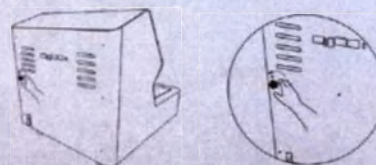

- ④ Push the TRANSPORT FIXED PLUG into the above handle hole position.

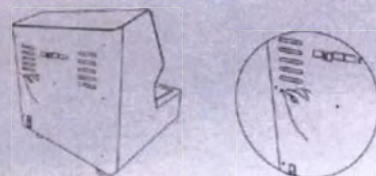

Транспортировочная заглушка



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

17 (сильнодусь) ЛИСТОВ
цифрами прописью

Должность

Подпись

Панюков Ю.В.

20 24 г. М.П.

