



서울시 구로구 디지털로 31길 38-21

509호 (구로동, 이앤씨3차)

[별지 제41호서식]

이앤씨 DLS
법무법인

(전화) 02-6330-8660

(팩스) 02-6330-8680

Registered No. 2024 - 290

NOTARIAL CERTIFICATE

D. L. S PARTNERS

E&C Venture Dream Tower 3rd Rm#509, 38-21,

Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, Korea

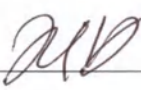


210mm X 297mm

보존용지(1종) 70g/m²

Date: 27th of July , 2022

«Approved»



(signature)
Heo Young Ku
CEO
“Neobiotech Co., Ltd.”



INSTRUCTION FOR USE

for the medical device

Instruments and appliances Neobiotech for dental implantology in kits.

Version 1

1. Device Name

Instruments and appliances Neobiotech for dental implantology in kits.

I. Versions

I. Sinus literal approach kit, item SLAKIT, consisting of:

1. C-Reamer LC520 – 1 ea.
2. C-Reamer LC620 – 1 ea.
3. C-Reamer LC720 – 1 ea.
4. C-Reamer LC535 – 1 ea.
5. C-Reamer LC635 – 1 ea.
6. C-Reamer LC735 – 1 ea.
7. C-Guide reamer SCG510 – 1 ea.
8. C-Guide reamer SCG610 – 1 ea.
9. C-Guide reamer SCG710 – 1 ea.
10. LS-reamer LS520 – 1 ea.
11. LS-reamer LS620 – 1 ea.
12. LS-reamer LS720 – 1 ea.
13. LS-reamer LS535 – 1 ea.
14. LS-reamer LS635 – 1 ea.
15. LS-reamer LS735 – 1 ea.
16. Sinus Elevator SLE02 – 1 ea.
17. Sinus Elevator SLE03 – 1 ea.
18. Sinus Elevator SLE05 – 1 ea.
19. Kit tray – 1 ea.



II. Sinus lifting kit, item SCAKIT, consisting of:

1. Point Drill SSD20 – 1 ea.
2. S-reamer ICR24 – 1 ea.
3. S-reamer ICR28 – 1 ea.
4. S-reamer ICR32 – 1 ea.
5. S-reamer ICR36 – 1 ea.
6. Drill stopper SKS02 – 1 ea.
7. Drill stopper SKS03 – 1 ea.
8. Drill stopper SKS04 – 1 ea.
9. Drill stopper SKS05 – 1 ea.
10. Drill stopper SKS06 – 1 ea.
11. Drill stopper SKS07 – 1 ea.
12. Drill stopper SKS08 – 1 ea.
13. Drill stopper SKS09 – 1 ea.
14. Drill stopper SKS10 – 1 ea.
15. Drill stopper SKS11 – 1 ea.
16. Bone spreader SBS20 – 1 ea.
17. Bone spreader SBS30 – 1 ea.
18. Bone Condenser SBC01 – 1 ea.
19. Bone inserter SBI27 – 1 ea.
20. Bone material carrier JUMBO2 – 1 ea.
21. Depth Gauge SDG00 – 1 ea.
22. Kit tray – 1 ea.

III. Submerged Fixture removerkit, item FRKIT, consisting of:

1. Fixture remover FR315 – 1 ea.

2. Fixture remover FR320 – 1 ea.
3. Fixture remover FR415 – 1 ea.
4. Fixture remover FR420 – 1 ea.
5. Fixture remover FR515 – 1 ea.
6. Fixture remover FR520 – 1 ea.
7. Fixture remover FR615 – 1 ea.
8. Fixture remover FR620 – 1 ea.
9. Fixture remover screw FRS172 – 2 ea.
10. Fixture remover screw FRS14 – 2 ea.
11. Fixture remover screw FRS16 – 2 ea.
12. Fixture remover screw FRS18 – 2 ea.
13. Fixture remover screw FRS20 – 2 ea.
14. Fixture remover screw FRS25 – 2 ea.
15. Torque Ratchet FRCHT – 1 ea.
16. Torque Wrench TW80400 – 1 ea.
17. Hex Driver HDF1607 – 1 ea.
18. Hex Driver HDF1612 – 1 ea.
19. Hex Driver HDF1617 – 1 ea.
20. Kit tray – 1 ea.

IV. Kit for removal of broken screws from implants, item SRKIT2, consisting of:

1. Claw CD16 – 1 ea.
2. Claw CD18 – 1 ea.
3. Claw CD20 – 1 ea.
4. Claw CD25 – 1 ea.
5. Reverse drill RCD10 – 1 ea.
6. Reverse drill RCD12 – 1 ea.
7. Reverse drill RCD14 – 1 ea.
8. Screw remover SR10 – 1 ea.
9. Screw remover SR12 – 1 ea.
10. Screw remover SR14 – 1 ea.
11. Drill Guide PG1018 – 1 ea.
12. Drill Guide PG1220 – 1 ea.
13. Drill Guide PG1425 – 1 ea.
14. Conical Guide CG00 – 1 ea.
15. Internal Guide IHG24 – 1 ea.
16. Internal Guide IHG25 – 1 ea.
17. Internal Guide IOG31 – 1 ea.
18. External Guide EHG24 – 1 ea.
19. External Guide EHG27 – 1 ea.
20. External Guide EHG34 – 1 ea.
21. Instruments guide PGHD25SS – 1 ea.
22. Guide Holder GH00 – 1 ea.
23. Ratchet adapter SHD00 – 1 ea.
24. Kit tray – 1 ea.

V. Surgical kit S-WIDE KIT for implants S-Wide placing, item SWKIT, consisting of:

1. S-wide surgical drill TSD48 – 1 ea.
2. S-wide surgical drill TSD50 – 1 ea.
3. S-wide surgical drill TSD55 – 1 ea.
4. S-wide surgical drill TSD60 – 1 ea.

5. S-wide surgical drill TSD65 – 1 ea.
6. S-wide Tap Drill TD55 – 1 ea.
7. S-wide Tap Drill TD60 – 1 ea.
8. S-wide Tap Drill TD70 – 1 ea.
9. S-wide Multi Profile drill MP55 – 1 ea.
10. S-wide Multi Profile drill MP60 – 1 ea.
11. S-wide Multi Profile drill MP70 – 1 ea.
12. Trephine Drill TB40 – 1 ea.
13. Trephine Drill TB50 – 1 ea.
14. S-Wide Drill Stopper DSL060 – 1 ea.
15. S-Wide Drill Stopper DSL070 – 1 ea.
16. S-Wide Drill Stopper DSL085 – 1 ea.
17. S-Wide Drill Stopper DSL100 – 1 ea.
18. S-Wide Drill Stopper DSL115 – 1 ea.
19. Hex driver HD1212S – 1 ea.
20. Ratchet Connector RC15 – 1 ea.
21. Contra angle connector CAA00 – 1 ea.
22. Kit tray – 1 ea.

VI. Surgical kit S-WIDE KIT for implants S-Wide placing, item SWKIT2, consisting of:

1. Surgical drill TSDW50 – 1 ea.
2. Surgical drill TSDW56 – 1 ea.
3. Trephine Drill TB39 – 1 ea.
4. Marker DM45 – 1 ea.
5. Drill stopper DSW050 – 1 ea.
6. Drill stopper DSW060 – 1 ea.
7. Drill stopper DSW066 – 1 ea.
8. Drill stopper DSW073 – 1 ea.
9. Drill stopper DSW085 – 1 ea.
10. Drill stopper DSW100 – 1 ea.
11. Drill stopper DSW115 – 1 ea.
12. Kit tray – 1 ea.

VII. Surgical kit S-MINI KIT for implants placing, item SMKIT, consisting of:

1. Parallel Pin MPP10 – 2 ea.
2. S-Mini surgical drill MSD15 – 1 ea.
3. S-Mini surgical drill MSD20 – 1 ea.
4. S-Mini surgical drill MSD25 – 1 ea.
5. S-Mini surgical drill MSD30 – 1 ea.
6. Fixture Driver ISQD20 – 1 ea.
7. Fixture Driver BADH24 – 1 ea.
8. Ratchet Connector RC15 – 1 ea.
9. Contra angle connector CAA00 – 1 ea.
10. S-Mini Guide Drill MGD12 – 1 ea.
11. Kit tray – 1 ea.

VIII. Surgical kit EZ-GBR KIT for GBR (guided bone regeneration), item EZGBRKIT, consisting of :

1. EZ-Screw Fixation Drill EZSFD17 – 1 ea.
2. EZ-Screw Fixation Drill Stopper EZSFDS050 – 1 ea.
3. EZ-Break Driver EZBRD – 1 ea.

4. EZ-Cover Cap Driver EZCCD42 – 1 ea.
5. Dual Hex Driver DHDC10 – 1 ea.
6. Dual Hex Driver DHDC20 – 1 ea.
7. Ratchet Connector GRC15 – 1 ea.
8. Driver Handle DRH – 1 ea.
9. Connector EZ-Handle EZHC12 – 1 ea.
10. Phillips Head Screw Driver PHSD05 – 1 ea.
11. Phillips Head Screw Driver PHSD10 – 1
12. Phillips Head Screw Driver PHSD20 – 1 ea.
13. EZ-Phillips Head Driver EZPHD3502 – 1 ea.
14. EZ-Phillips Head Driver EZPHD3512 – 1 ea.
15. EZ-Phillips Head Driver EZPHD3520 – 1 ea.
16. EZ-Ti-Mem Push Driver EZPD68 – 1 ea.
17. Kit tray – 1 ea.

IX. Surgical kit for implants placing, item ISFFKIT, consisting of :

1. Lindemann Drill LDS23C – 1 ea.
2. Surgical drill TSD22CS – 1 ea.
3. Surgical drill TSD22CL – 1 ea.
4. Surgical drill TSD30CS – 1 ea.
5. Surgical drill TSD30CL – 1 ea.
6. Surgical drill TSD35CS – 1 ea.
7. Surgical drill TSD35CL – 1 ea.
8. Surgical drill TSD40CS – 1 ea.
9. Surgical drill TSD40CL – 1 ea.
10. Surgical drill TSD45CS – 1 ea.
11. Surgical drill TSD45CL – 1 ea.
12. Cortical Drill ISCD35F – 1 ea.
13. Cortical Drill ISCD40F – 1 ea.
14. Cortical Drill ISCD45F – 1 ea.
15. Cortical Drill ISCD50F – 1 ea.
16. Cortical Tap PTAP35FS – 1 ea.
17. Cortical Tap PTAP40FS – 1 ea.
18. Cortical Tap PTAP45FS – 1 ea.
19. Cortical Tap PTAP50FS – 1 ea.
20. Drill stopper DS030C – 1 ea.
21. Drill stopper DS040C – 1 ea.
22. Drill stopper DS050C – 1 ea.
23. Drill stopper DS060C – 1 ea.
24. Drill stopper DS066C – 1 ea.
25. Drill stopper DS070C – 1 ea.
26. Drill stopper DS085C – 1 ea.
27. Drill stopper DS100C – 1 ea.
28. Drill stopper DS115C – 1 ea.
29. Drill stopper DS130C – 1 ea.
30. Hex driver HD1210S – 1 ea.
31. Hex driver HD1215S – 1 ea.
32. Ratchet Connector RC10 – 1 ea.
33. Ratchet Connector RC15 – 1 ea.
34. Screw implant Direction Pin DPIS35C – 1 ea.
35. Screw implant Direction Pin DPIS45C – 2 ea.

36. Parallel Pin PP07F – 1 ea.
37. Parallel Pin PP08F – 1 ea.
38. Parallel Pin PP10F – 1 ea.
39. Drill Extension DE01 – 1 ea.
40. Torque Ratchet TW60 – 1 ea.
41. Contra angle Connector CAA00 – 1 ea.
42. Depth Gauge DG17 – 1 ea.
43. Driver Holder DH02 – 1 ea.
44. Fixture Driver ISFD05C – 1 ea.
45. Fixture Driver ISFD05CL – 1 ea.
46. Fixture Driver ISFD10R – 1 ea.
47. Fixture Driver ISFD15R – 1 ea.
48. Kit tray – 1 ea.

X. Surgical accessory kit NEO SURGICAL ACCESSORY KIT for implantation, item ACCKIT, consisting of:

1. Fixture Diameter Marker DM35 – 1 ea.
2. Fixture Diameter Marker DM40 – 1 ea.
3. Fixture Diameter Marker DM45 – 1 ea.
4. Fixture Diameter Marker DM50 – 1 ea.
5. Fixture Diameter Marker DM55 – 1 ea.
6. Fixture Diameter Marker DM60 – 1 ea.
7. Bone Planer BP35 – 1 ea.
8. Bone Planer BP40 – 1 ea.
9. Bone Planer BP50 – 1 ea.
10. Bone Planer BP65 – 1 ea.
11. Bone Planer BP80 – 1 ea.
12. Bone Profiler BPN40 – 1 ea.
13. Bone Profiler BPR50 – 1 ea.
14. Bone Profiler BPI60 – 1 ea.
15. Bone Profiler BPB60 – 1 ea.
16. Bone Profiler ISBP48 – 1 ea.
17. Bone Profiler ISBP55 – 1 ea.
18. Bone Profiler ISBP60 – 1 ea.
19. Hex driver ratchet QTH1215 – 1 ea.
20. Hex driver ratchet QTH12515 – 1 ea.
21. Tissue Punch TP35 – 1 ea.
22. Tissue Punch TP40 – 1 ea.
23. Tissue Punch TP45 – 1 ea.
24. Tissue Punch TP50 – 1 ea.
25. Ratchet Connector RC15 – 1 ea.
26. Kit tray – 1 ea.

XI. Universal prosthetic kit for various implant systems, item UVPRTKIT, consisting of:

1. Hex driver HD1210S – 1 ea.
2. Hex driver HD1215S – 1 ea.
3. Hex driver HD12510S – 1 ea.
4. Hex driver HD12515S – 1 ea.
5. Driver SCSD10S – 1 ea.
6. Driver SCSD15S – 1 ea.
7. Driver UGD10S – 1 ea.

8. Driver UGD15S – 1 ea.
9. Driver Holder DH02 – 1 ea.
10. Torque Ratchet TW60 – 1 ea.
11. Kit tray – 1 ea.

XII. Prosthetic kit, item PRTKIT, consisting of:

1. Hex Driver - Ratchet Type HD1210S – 1 ea.
2. Hex Driver - Ratchet Type HD1215S – 1 ea.
3. Hex Driver - Ratchet Type HD1220S – 1 ea.
4. Hex Driver - Ratchet Type HD1225S – 1 ea.
5. Hex Driver - Ratchet Type HD12510S – 1 ea.
6. Hex Driver - Ratchet Type HD12515S – 1 ea.
7. Hex Driver - Ratchet Type HD12520S – 1 ea.
8. Hex Driver - Ratchet Type HD12525S – 1 ea.
9. Hex Driver - Contra Angle Type HDC1210 – 1 ea.
10. Hex Driver - Contra Angle Type HDC1215 – 1 ea.
11. Hex Driver - Contra Angle Type HDC12510 – 1 ea.
12. Hex Driver - Contra Angle Type HDC12515 – 1 ea.
13. Hex Driver - Hand Type HDH1220S – 1 ea.
14. Hex Driver - Hand Type HDH12520S – 1 ea.
15. Hex Driver - Ratchet Type HD1220RCS – 1 ea.
16. Hex Driver - Ratchet Type HD12520RCS – 1 ea.
17. Angled Driver HDA1215S – 1 ea.
18. Angled Driver HDA1220S – 1 ea.
19. Angled Driver HDA12515S – 1 ea.
20. Angled Driver HDA12520S – 1 ea.
21. Abutment Positioner AP202N – 1 ea.
22. Abutment Positioner AP205N – 1 ea.
23. Abutment Positioner AP207N – 1 ea.
24. Abutment Positioner AP252N – 1 ea.
25. Abutment Positioner AP255N – 1 ea.
26. Abutment Positioner AP257N – 1 ea.
27. Torque Ratchet TW60 – 1 ea.
28. Kit tray – 1 ea.

XIII. Neo PickCap Impression kit, item PCIKIT, consisting of:

1. Abutment Positioner AP165N – 1 ea.
2. Hex driver HD1215S – 1 ea.
3. Hex driver HD1220S – 1 ea.
4. Hex driver HD1225S – 1 ea.
5. PickCap Impression Body ISPCIB3503 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
6. PickCap Impression Body ISPCIB3510 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
7. PickCap Impression Body ISPCIB4008 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
8. PickCap Impression Body ISPCIB3505 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
9. PickCap Impression Body ISPCIB4003 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)

10. PickCap Impression Body ISPCIB4010 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
11. PickCap Impression Body ISPCIB3508 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
12. PickCap Impression Body ISPCIB4005 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
13. PickCap Impression Body ISPCIB403 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
14. PickCap Impression Body ISPCIB405 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
15. PickCap Impression Body ISPCIB502 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
16. PickCap Impression Body ISPCIB505 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
17. PickCap Impression Body ISPCIB603 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
18. PickCap Impression Body ISPCIB606 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
19. PickCap Impression Body ISPCIB704 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
20. PickCap Impression Body ISPCIB803 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
21. PickCap Impression Body ISPCIB904 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
22. PickCap Impression Body ISPCIB408 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
23. PickCap Impression Body ISPCIB503 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
24. PickCap Impression Body ISPCIB506 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
25. PickCap Impression Body ISPCIB604 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
26. PickCap Impression Body ISPCIB702 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
27. PickCap Impression Body ISPCIB705 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
28. PickCap Impression Body ISPCIB804 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
29. PickCap Impression Body ISPCIB410 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
30. PickCap Impression Body ISPCIB504 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
31. PickCap Impression Body ISPCIB602 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
32. PickCap Impression Body ISPCIB605 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
33. PickCap Impression Body ISPCIB703 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
34. PickCap Impression Body ISPCIB706 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)

35. PickCap Impression Body ISPCIB903 (3 ea.) with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20 (3 ea.)
36. PickCap Impression Cap PCISC01 – 50 ea.
37. PickCap Impression Cap PCILC01 – 50 ea.
38. Pincette PCIPC – 1 ea.
39. Kit tray – 1 ea.

XIV. Surgical kit NEO NAVIGUIDE KIT for placing of implants with plugs for surgical guides NEO NAVIGUIDE KIT, item NEONGKIT, consisting of:

1. Initial drill NGTWD2207 – 1 ea.
2. Initial drill NGTWD2208 – 1 ea.
3. Initial drill NGTWD2210 – 1 ea.
4. Initial drill NGTWD2211 – 1 ea.
5. Initial drill NGTWD2213 – 1 ea.
6. Taper Drill NGTD3007 – 1 ea.
7. Taper Drill NGTD3008 – 1 ea.
8. Taper Drill NGTD3010 – 1 ea.
9. Taper Drill NGTD3011 – 1 ea.
10. Taper Drill NGTD3013 – 1 ea.
11. Taper Drill NGTD3507 – 1 ea.
12. Taper Drill NGTD3508 – 1 ea.
13. Taper Drill NGTD3510 – 1 ea.
14. Taper Drill NGTD3511 – 1 ea.
15. Taper Drill NGTD3513 – 1 ea.
16. Taper Drill NGTD4007 – 1 ea.
17. Taper Drill NGTD4008 – 1 ea.
18. Taper Drill NGTD4010 – 1 ea.
19. Taper Drill NGTD4011 – 1 ea.
20. Taper Drill NGTD4013 – 1 ea.
21. Taper Drill NGTD4507 – 1 ea.
22. Taper Drill NGTD4508 – 1 ea.
23. Taper Drill NGTD4510 – 1 ea.
24. Taper Drill NGTD4511 – 1 ea.
25. Taper Drill NGTD4513 – 1 ea.
26. Point Drill NGPD22 – 1 ea.
27. Cortical Drill NGCD40F – 1 ea.
28. Cortical Drill NGCD45F – 1 ea.
29. Cortical Drill NGCD50F – 1 ea.
30. Cortical Tap NGISCT40R – 1 ea.
31. Cortical Tap NGISCT45R – 1 ea.
32. Cortical Tap NGISCT50W – 1 ea.
33. Bone Trimmer NGBT00 – 1 ea.
34. Bone Trimmer NGBT15 – 1 ea.
35. Bone Trimmer NGBT30 – 1 ea.
36. Bone Profiler ISBP55 – 1 ea.
37. Bone Profiler ISBP60 – 1 ea.
38. Hex driver HD1215S – 1 ea.
39. Tissue Punch NGTP43R – 1 ea.
40. Drill Extension DE01 – 1 ea.
41. Torque Ratchet TW60 – 1 ea.
42. Vertical Anchor SGVABRW – 2 ea.



43. Vertical Anchor SGISVAFRW – 2 ea.
44. Contra Angle Connector SGCAC00 – 1 ea.
45. Ratchet Connector SGRC10 – 1 ea.
46. Fixture Adapter with stopper SGISFARW – 1 ea.
47. Fixture Adapter without stopper SGISFARW30 – 2 ea.
48. Fixture Adapter Removal Tool SGFART20 – 1 ea.
49. Fixture Driver NGISFDR – 1 ea.
50. Fixture Driver NGISFDCA – 1 ea.
51. Kit tray – 1 ea.

XV. Mini-guide kit for IS-II active, IS-III active systems implants, item NEONGNKIT, consisting of:

1. Initial drill NGTWD2208N – 1 ea.
2. Initial drill NGTWD2210N – 1 ea.
3. Initial drill NGTWD2211N – 1 ea.
4. Initial drill NGTWD2213N – 1 ea.
5. Initial drill NGTWD2214N – 1 ea.
6. Taper drill NGTD3008N – 1 ea.
7. Taper drill NGTD3010N – 1 ea.
8. Taper drill NGTD3011N – 1 ea.
9. Taper drill NGTD3013N – 1 ea.
10. Taper drill NGTD3014N – 1 ea.
11. Point drill NGPD22N – 1 ea.
12. Cortical Tap NGISCT35N – 1 ea.
13. Cortical Tap NGISCT35NS – 1 ea.
14. Drill Extension DE01 – 1 ea.
15. Contra angle connector SGCAC00 – 1 ea.
16. Ratchet Connector SGRC10 – 1 ea.
17. Fixture Adapter SGISFAN – 1 ea.
18. Fixture Adapter SGISFAN30 – 1 ea.
19. Fixture Driver NGISFDRN – 1 ea.
20. Fixture Driver NGISFDCAN – 1 ea.
21. Kit tray – 1 ea.

XVI. Stop drill kit, item STOPDRILLKIT, consisting of:

1. Stop Drill TSD2207F3 – 1 ea.
2. Stop Drill TSD2208F3 – 1 ea.
3. Stop Drill TSD2210F3 – 1 ea.
4. Stop Drill TSD2211F3 – 1 ea.
5. Stop Drill TSD2213F3 – 1 ea.
6. Stop Drill TSD3007F3 – 1 ea.
7. Stop Drill TSD3008F3 – 1 ea.
8. Stop Drill TSD3010F3 – 1 ea.
9. Stop Drill TSD3011F3 – 1 ea.
10. Stop Drill TSD3013F3 – 1 ea.
11. Stop Drill TSD3507F3 – 1 ea.
12. Stop Drill TSD3508F3 – 1 ea.
13. Stop Drill TSD3510F3 – 1 ea.
14. Stop Drill TSD3511F3 – 1 ea.
15. Stop Drill TSD3513F3 – 1 ea.
16. Stop Drill TSD4007F3 – 1 ea.

17. Stop Drill TSD4008F3 – 1 ea.
18. Stop Drill TSD4010F3 – 1 ea.
19. Stop Drill TSD4011F3 – 1 ea.
20. Stop Drill TSD4013F3 – 1 ea.
21. Stop Drill TSD4507F3 – 1 ea.
22. Stop Drill TSD4508F3 – 1 ea.
23. Stop Drill TSD4510F3 – 1 ea.
24. Stop Drill TSD4511F3 – 1 ea.
25. Stop Drill TSD4513F3 – 1 ea.
26. Point Drill PD13 – 1 ea.
27. Hex Driver - Ratchet Type HD1215S – 1 ea.
28. Drill Extension DE01 – 1 ea.
29. Ratchet Connector RC10 – 1 ea.
30. Torque Ratchet TW60 – 1 ea.
31. Spacer MDS4025 – 1 ea.
32. Spacer MDS7030 – 1 ea.
33. Spacer MDS8030 – 1 ea.
34. Parallel Pin MDPP4050 – 1 ea.
35. Parallel Pin MDPP6070 – 1 ea.
36. Parallel Pin MDPP8090 – 1 ea.
37. Screw implant Direction Pin DP36 – 1 ea.
38. Screw implant Direction Pin DP45 – 2 ea.
39. Driver Holder & Depth Gauge DHDG – 1 ea.
40. Kit tray – 1 ea.

XVII. Prosthetic Planning KIT, item PRTPNKIT, consisting of:

1. Prosthetic Planning-Straight PISAH415 – 1 ea.
2. Prosthetic Planning-Straight PISAH515 – 1 ea.
3. Prosthetic Planning-Straight PISAH615 – 1 ea.
4. Prosthetic Planning-Straight PISAH715 – 1 ea.
5. Prosthetic Planning-Straight PISAH425 – 1 ea.
6. Prosthetic Planning-Straight PISAH525 – 1 ea.
7. Prosthetic Planning-Straight PISAH625 – 1 ea.
8. Prosthetic Planning-Straight PISAH725 – 1 ea.
9. Prosthetic Planning-Straight PISAH435 – 1 ea.
10. Prosthetic Planning-Straight PISAH535 – 1 ea.
11. Prosthetic Planning-Straight PISAH635 – 1 ea.
12. Prosthetic Planning-Straight PISAH735 – 1 ea.
13. Prosthetic Planning-Straight PISAH445 – 1 ea.
14. Prosthetic Planning-Straight PISAH545 – 1 ea.
15. Prosthetic Planning-Straight PISAH645 – 1 ea.
16. Prosthetic Planning-Straight PISAH745 – 1 ea.
17. Prosthetic Planning-Angled PISAHA1427 – 1 ea.
18. Prosthetic Planning-Angled PISAHA1527 – 1 ea.
19. Prosthetic Planning-Angled PISAHA1627 – 1 ea.
20. Prosthetic Planning-Angled PISAHA2427 – 1 ea.
21. Prosthetic Planning-Angled PISAHA2527 – 1 ea.
22. Prosthetic Planning-Angled PISAHA1447 – 1 ea.
23. Prosthetic Planning-Angled PISAHA1547 – 1 ea.
24. Prosthetic Planning-Angled PISAHA1647 – 1 ea.
25. Prosthetic Planning-Angled PISAHA2447 – 1 ea.

26. Prosthetic Planning-Angled PISAHA2547 – 1 ea.
27. Prosthetic Planning-Angled PISAHB1427 – 1 ea.
28. Prosthetic Planning-Angled PISAHB1527 – 1 ea.
29. Prosthetic Planning-Angled PISAHB1627 – 1 ea.
30. Prosthetic Planning-Angled PISAHB2427 – 1 ea.
31. Prosthetic Planning-Angled PISAHB2527 – 1 ea.
32. Prosthetic Planning-Angled PISAHB1447 – 1 ea.
33. Prosthetic Planning-Angled PISAHB1547 – 1 ea.
34. Prosthetic Planning-Angled PISAHB1647 – 1 ea.
35. Prosthetic Planning-Angled PISAHB2447 – 1 ea.
36. Prosthetic Planning-Angled PISAHB2547 – 1 ea.
37. Kit tray – 1 ea.

XVIII. Sinus lifting kit, item SAKIT, consisting of:

1. Initial drill SAD22 – 1 ea.
2. Surgical drill SAD28 – 1 ea.
3. Surgical drill SAD32 – 1 ea.
4. Surgical drill SAD37 – 1 ea.
5. Surgical drill SAD40 – 1 ea.
6. S-reamer SASR28 – 1 ea.
7. S-reamer SASR32 – 1 ea.
8. S-reamer SASR36 – 1 ea.
9. S-reamer SASR39 – 1 ea.
10. C-reamer SAC640 – 1 ea.
11. C-Guide-reamer SACG610 – 1 ea.
12. LS-reamer SALS640 – 1 ea.
13. Side Cutter SCT30 – 1 ea.
14. Crestal Stopper CDS010 – 1 ea.
15. Crestal Stopper CDS020 – 1 ea.
16. Crestal Stopper CDS030 – 1 ea.
17. Crestal Stopper CDS040 – 1 ea.
18. Crestal Stopper CDS050 – 1 ea.
19. Crestal Stopper CDS060 – 1 ea.
20. Crestal Stopper CDS070 – 1 ea.
21. Crestal Stopper CDS080 – 1 ea.
22. Crestal Stopper CDS090 – 1 ea.
23. Crestal Stopper CDS100 – 1 ea.
24. Crestal Stopper CDS110 – 1 ea.
25. Crestal Stopper CDS120 – 1 ea.
26. Lateral Stopper LTS010 – 1 ea.
27. Lateral Stopper LTS020 – 1 ea.
28. Lateral Stopper LTS030 – 1 ea.
29. Lateral Stopper LTS040 – 1 ea.
30. Aqua Tap AQT – 1 ea.
31. Aqua System AQST – 1 ea.
32. Depth Gauge SADG01 – 1 ea.
33. Bone carrier JUMBO2 – 1 ea.
34. Bone Condenser SABC01 – 1 ea.
35. Drill Handle SADH01 – 1 ea.
36. Rotary Elevator SARE28 – 1 ea.
37. Rotary Elevator SARE32 – 1 ea.

38. Rotary Elevator SARE36 – 1 ea.
39. Rotary Elevator SARE39 – 1 ea.
40. Sinus Elevator SLE01 – 1 ea.
41. Sinus Elevator SLE02 – 1 ea.
42. Sinus Elevator SLE03 – 1 ea.
43. Torque Ratchet TW60 – 1 ea.
44. Hex Driver - Ratchet Type HD1215S – 1 ea.
45. Fixture Driver ISFD05C – 1 ea.
46. Fixture Driver ISFD10R – 1 ea.
47. Fixture Driver ISFD15R – 1 ea.
48. Kit tray – 1 ea.

XIX. Ridge Wider kit, item RWKIT, consisting of:

1. Screw Fixation Drill SFD15 – 1 ea.
2. Bone Trimmer BTRI6010 – 1 ea.
3. Bone Expander BEXP30 – 1 ea.
4. Bone Expander BEXP35 – 1 ea.
5. Bone Expander BEXP40 – 1 ea.
6. Bone Expander BEXP45 – 1 ea.
7. Bone Expander BEXP50 – 1 ea.
8. Safe Disk - Non-Saw Type SAWD0703N – 1 ea.
9. Safe Disk - Non-Saw Type SAWD1003N – 1 ea.
10. Safe Disk - Non-Saw Type SAWD1303N – 1 ea.
11. Safe Disk - Non-Saw Type SAWD0710N – 1 ea.
12. Screw Fixation Drill Stopper SFDS030 – 1 ea.
13. Screw Fixation Drill Stopper SFDS050 – 1 ea.
14. Screw Fixation Drill Stopper SFDS070 – 1 ea.
15. Ratchet Connector RC15 – 1 ea.
16. Bone Chisel BCHI60 – 1 ea.
17. Kit tray – 1 ea.

XX. Neo Master KIT, item NEOMKIT, consisting of:

1. Point Drill PD13 – 1 ea.
2. Surgical drill TSD22CL – 1 ea.
3. Surgical drill TSD30CL – 1 ea.
4. Surgical drill TSD35CL – 1 ea.
5. Surgical drill TSD40CL – 1 ea.
6. Surgical drill TSD45CL – 1 ea.
7. Surgical drill TSD22CS – 1 ea.
8. Surgical drill TSD30CS – 1 ea.
9. Surgical drill TSD35CS – 1 ea.
10. Surgical drill TSD40CS – 1 ea.
11. Surgical drill TSD45CS – 1 ea.
12. Drill stopper DS030C – 1 ea.
13. Drill stopper DS040C – 1 ea.
14. Drill stopper DS050C – 1 ea.
15. Drill stopper DS060C – 1 ea.
16. Drill stopper DS066C – 1 ea.
17. Drill stopper DS070C – 1 ea.
18. Drill stopper DS085C – 1 ea.
19. Drill stopper DS100C – 1 ea.

20. Drill stopper DS115C – 1 ea.
21. Drill stopper DS130C – 1 ea.
22. Spacer MDS4025 – 1 ea.
23. Spacer MDS7030 – 1 ea.
24. Spacer MDS8030 – 1 ea.
25. Parallel Pin MDPP4050 – 1 ea.
26. Parallel Pin MDPP6070 – 1 ea.
27. Parallel Pin MDPP8090 – 1 ea.
28. Drill Extension DE01 – 1 ea.
29. Torque Ratchet TW60 – 1 ea.
30. Ratchet Connector RC10 – 1 ea.
31. Ratchet Connector RC15 – 1 ea.
32. Screw implant direction pin DP36 – 1 ea.
33. Screw implant direction pin DP45 – 2 ea.
34. Hex driver HD1210S – 1 ea.
35. Hex driver HD1215S – 1 ea.
36. Driver Holder & Depth Gauge DHDG – 1 ea.
37. Kit tray – 1 ea.

XXI. Neo Core kit, item NEOCKIT, consisting of:

1. Point Drill PD13 – 1 ea.
2. Surgical drill TSD22CS – 1 ea.
3. Surgical drill TSD30CS – 1 ea.
4. Surgical drill TSD35CS – 1 ea.
5. Surgical drill TSD40CS – 1 ea.
6. Surgical drill TSD45CS – 1 ea.
7. Drill stopper DS070C – 1 ea.
8. Drill stopper DS085C – 1 ea.
9. Drill stopper DS100C – 1 ea.
10. Drill stopper DS115C – 1 ea.
11. Drill stopper DS130C – 1 ea.
12. Parallel Pin PP08F – 1 ea.
13. Parallel Pin PP10F – 1 ea.
14. Torque Ratchet TW60 – 1 ea.
15. Ratchet Connector RC15 – 1 ea.
16. Drill Extension DE01 – 1 ea.
17. Hex driver HD1215S – 1 ea.
18. Fixture Driver ISFD05C – 1 ea.
19. Kit tray – 1 ea.



XXII. Neo surgical kit for implant placing, item NEOSKIT, consisting of:

1. Lindemann Drill LDS23C – 1 ea.
2. Surgical drill TSD22CS – 1 ea.
3. Surgical drill TSD22CL – 1 ea.
4. Surgical drill TSD30CS – 1 ea.
5. Surgical drill TSD30CL – 1 ea.
6. Surgical drill TSD35CS – 1 ea.
7. Surgical drill TSD35CL – 1 ea.
8. Surgical drill TSD40CS – 1 ea.
9. Surgical drill TSD40CL – 1 ea.
10. Surgical drill TSD45CS – 1 ea.

11. Surgical drill TSD45CL – 1 ea.
12. Cortical Drill ISCD35F – 1 ea.
13. Cortical Drill ISCD40F – 1 ea.
14. Cortical Drill ISCD45F – 1 ea.
15. Cortical Drill ISCD50F – 1 ea.
16. Cortical Tap ISTD38S – 1 ea.
17. Cortical Tap ISTD43S – 1 ea.
18. Cortical Tap ISTD45S – 1 ea.
19. Cortical Tap ISTD50S – 1 ea.
20. Drill stopper DS030C – 1 ea.
21. Drill stopper DS040C – 1 ea.
22. Drill stopper DS050C – 1 ea.
23. Drill stopper DS060C – 1 ea.
24. Drill stopper DS066C – 1 ea.
25. Drill stopper DS070C – 1 ea.
26. Drill stopper DS085C – 1 ea.
27. Drill stopper DS100C – 1 ea.
28. Drill stopper DS115C – 1 ea.
29. Drill stopper DS130C – 1 ea.
30. Ratchet Connector RC10 – 1 ea.
31. Ratchet Connector RC15 – 1 ea.
32. Screw implant Direction Pin DPIS35C – 1 ea.
33. Screw implant Direction Pin DPIS45C – 2 ea.
34. Parallel Pin PP07F – 1 ea.
35. Parallel Pin PP08F – 1 ea.
36. Parallel Pin PP10F – 1 ea.
37. Drill Extension DE01 – 1 ea.
38. Torque Ratchet TW60 – 1 ea.
39. Contra angle connector CAA00 – 1 ea.
40. Driver Holder & Depth Gauge DHDG – 1 ea.
41. Hex driver HD1210S – 1 ea.
42. Hex driver HD1215S – 1 ea.
43. Fixture Driver ISFD05C – 1 ea.
44. Fixture Driver ISFD05CL – 1 ea.
45. Fixture Driver ISFD10R – 1 ea.
46. Fixture Driver ISFD15R – 1 ea.
47. Kit tray – 1 ea.

XXIII. Driver kit, item FDHSET01, consisting of:

1. Driver, item FD00 – 1 ea.
2. Driver, item FH00 – 1 ea.

XXIV. Chip making kit, item NACM40ISETS, consisting of:

1. Chipmaker, item ACM40S – 1 ea.
2. Stopper, item ACMSI40S – 7 ea.

XXV. Chip making kit, item NACM45ISETS, consisting of:

1. Chipmaker, item ACM45S – 1 ea.
2. Stopper, item ACMSI45S – 7 ea.

XXVI. Chip making kit, item NACM50ISETS, consisting of:

1. Chipmaker, item ACM50S – 1 ea.
2. Stopper, item ACMSI50S – 7 ea.

XXVII. Chip making kit, item NACM60ISETS, consisting of:

1. Chipmaker, item ACM60S – 1 ea.
2. Stopper, item ACMSI60S – 7 ea.

II. Instruction for use (electronic form)

Hereinafter referred to as instruments, devices, kits.

2.Information on Medical Device Manufacturer, Developer, and Authorized Representative of the Manufacturer

Manufacturer:

Neobiotech Co., Ltd.

Legal address: #104,24 / #102, 103, 104-1, 104-2, 105, 106, 205, 212, 306, 312, 509, 510, 511, 608, 704, 708, 710 & 10F, 36, Digital-ro 27gil, Guro-gu, Seoul, 08381, Republic of Korea

Tel.: +82 2 582 2885

E-mail: info@neobiotech.com

Developer:

Neobiotech Co., Ltd.

Legal address: #104, 24/#102, 103, 104-1, 104-2, 105, 106, 205, 212, 306, 312, 509, 510, 511, 608, 704, 708, 710 & 10F, 36, Digital-ro 27gil, Guro-gu, Seoul, 08381, Republic of Korea

Tel.: +82 2 582 2885

E-mail: info@neobiotech.com

Manufacturing Sites:

Neobiotech Co., Ltd.

1. #104,24 / #102, 103, 104-1, 104-2, 105, 106, 205, 212, 306, 312, 509, 510, 511, 608, 704, 708, 710 & 10F, 36, Digital-ro 27gil, Guro-gu, Seoul, 08381, Republic of Korea
2. 1F, 60, Gasan digital 2-ro , Geumcheon-gu, Seoul, 08589, Republic of Korea

Authorized Representative of the Manufacturer in the Russian Federation:

GLAV DENTAL Limited Liability Company

Legal address: 127015, the Russian Federation, Moscow, Vyatskaya street, 49, building 2, E 2 Unit 1 office 60

Tel./fax: 8 (499) 652-77-10

E-mail: info@gl-dent.ru

Web: www.gl-dent.ru

3. Intended use of the Medical Device with the Indication of the Potential Consumer and Scope of application.

3.1 Intended use of the Medical Device

The devices are intended for surgical placement of implant and denture retainers, preparation of implant sites, removal of cortical bone, and threading of bones to avoid excessive torque generated during the implant placement into the hard bone.

3.2 Potential Consumers

Dentist surgeons, maxillofacial surgeons and dental implant surgeons.

3.3 Scope

Dental implantology, maxillofacial surgery.

4. Indications, Contraindications, Precautions and Possible Side Effects

4.1 Indications

They are used in dentistry as accessories in restorations in cases of sole tooth loss, partial or complete loss of teeth or already existing edentulism in both jaws by making an appropriate implant site in the jawbone.

In bones of any density and in the following clinical situations:

- The absence of one or more teeth as well as complete adentia
- Post-traumatic and postoperative defects of the jaw bones.

With appropriate bone characteristics (density, width and height of the bone):

- Single prosthetic dentures at the intervals from incisors to premolars
- Bridgework on the completely and partially edentulous jaw
- Rigid attachment of prostheses by means of dental bars and systems of ball-type fixation
- Attachment for orthodontic adjustment systems.

4.2. Contraindications

- 1) General dyspraxia not under control
- 2) Receive radiation treatment for malignant tumor
- 3) Patients who have problems with jaw relation and occlusion
- 4) Patients with oral infection or inflammation (improper oral hygiene, bruxism, xerostomia)
- 5) Diabetes, hypertension, endocrine gland pathologies, cardiovascular diseases
- 6) Pregnant, smoker, weak mental patients, such as, alcoholic, drug abuse, and neurotic
- 7) Blood coagulation defect or serious cardiac disorder patient
- 8) Allergy to metals in the devices
- 9) Other periodontal, or surgical operations contraindicated for the patient.

4.3 Precautions

- 1) The state of patients suffering from bone diseases (osteoporosis, osteomalacia), or bone metabolism disorders should be studied preliminarily, and care should be taken while treating such patients;
- 2) All our instruments are intended for use only in combination with Neobiotech Co., Ltd. implantable system, so their combined use with devices manufactured by other companies is prohibited;
- 3) Surgical intervention in implantation must be performed by a dentist trained and experienced in surgical intervention procedures. The specialist using implant fixtures must study thoroughly the work methods and precautions beforehand, and select devices suitable for the therapy plan. Inappropriate selection of patients, or improper use of devices may result in the implant function failure, or bone tissue loss around the implant fixture after the surgery.
- 4) Immediately after use, the instruments must be subjected to an appropriate disinfection and sterilization procedure in accordance with section 13 of this document.
- 5) A special container shall be used for storage to ensure protection against external impacts, or damage.
- 6) A chipmaker is designed only for combined use with a stopper for a maximum of 7 times. The stopper is designed for single use only. Its multiple use is prohibited.
- 7) These devices should be used together with Neobiotech implants and components for dental implantology as well as with Prosthetic components for dental implants Neobiotech registered in the established manner in the Russian Federation.
- 8) Devices with Type 1 shanks are compatible with dental handpieces of the appropriate type.

4.4 Side Effects

Potential complications may include malocclusion, paresthesia caused by nerve injury, infection, edema, subdermal hemorrhage, post-implantation suture line disruption, pain, and soft tissue ulcers.

5. Device Description, Design, Order of application.

These devices are used in surgical interventions associated with the use of dental implants. All instruments have various specifications such as length, diameter, and functions performed. Instruments may be chosen depending on the user's preferences, the patient's condition, and the therapy characteristics.

Some devices have colored metal surface resulting from special processing of metal, or special coating application, which enhance the durability of the instruments and improve their anti-corrosion properties. AlTiN (aluminum titanium nitride) coating is the coating application in an inert gas flow (black color of metal), while anodizing is the formation of an oxide film on the surface of metals by their anodic polarization in a conductive medium (yellow, pink, cyan, blue, and green colors of metal).

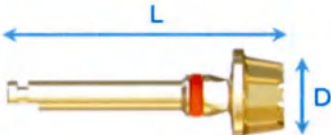
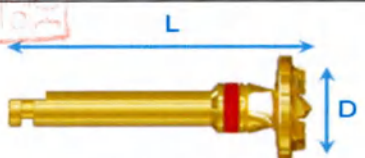
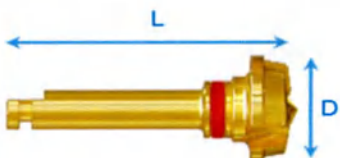
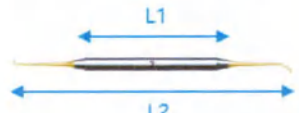
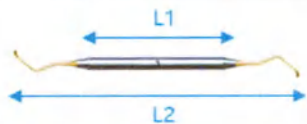
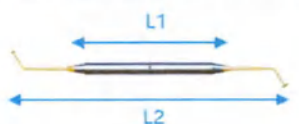
6. Description, order of application.

6.1. Sinus literal approach kit, item SLAKIT

Table 6.1.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
C-Reamer	The cutter for bone block formation. Main material: Steel	Set the cutter into the physiodispenser handpiece. Place it into the maxillary sinus and cut out the bone block while forming an access to the sinus.
C-Guide Reamer	A bone-punching drill Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole inside the bone.
LS-reamer	A drill for bone stripping without damaging the sinus membrane. Main material: Steel	Insert the drill into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Sinus Elevator	The curette for separation of the maxillary sinus mucosa. Main material: Steel	Separate the sinus mucosa with the curette through a hole cut in the bone.

Table 6.1.2. General dimensions.

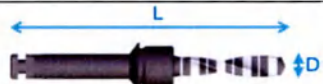
№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
1.	C-Reamer	LC520	22,5	5,5	
2.	C-Reamer	LC620	22,5	6,5	
3.	C-Reamer	LC720	22,5	7,5	
4.	C-Reamer	LC535	24,0	5,5	
5.	C-Reamer	LC635	24,0	6,5	
6.	C-Reamer	LC735	24,0	7,5	
7.	C-Guide Reamer	SCG510	22,0	5,5	
8.	C-Guide Reamer	SCG610	22,0	6,5	
9.	C-Guide Reamer	SCG710	22,0	7,5	
10.	LS-reamer	LS520	21,0	5,5	
11.	LS-reamer	LS620	21,0	6,5	
12.	LS-reamer	LS720	21,2	7,5	
13.	LS-reamer	LS535	23,1	5,5	
14.	LS-reamer	LS635	23,1	6,5	
15.	LS-reamer	LS735	23,3	7,5	
16.	Sinus Elevator	SLE02	L1 106,0 L2 181,0	-	
17.	Sinus Elevator	SLE03	L1 106,0 L2 184,0	-	
18.	Sinus Elevator	SLE05	L1 106,0 L2 199,0	-	

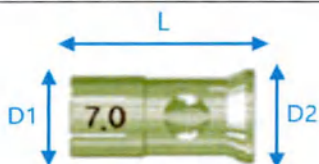
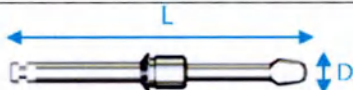
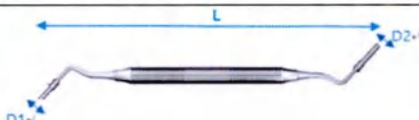
6.2. Sinus lifting kit, item SCAKIT.

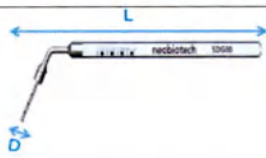
Table 6.2.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Point Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
S-reamer	The cutter for forming an access to the maxillary sinus. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Drill Stopper	The limiting stop for the cutter. Main material: Titanium	Set it upon the cutter. It will restrict the cutter penetration depth.
Bone Spreader	The instrument for propulsion of introduced bone material within the socket. Main material: Stainless steel	Set the cutter into the physiodispenser handpiece. Push bone chips into the bone hole and spread them within the lateral areas.
Bone Condenser	The instrument for compacting introduced bone chips. Main material: Stainless steel.	Use this instrument for packing and compacting bone chips.
Implant Drill for Bone Material Insertion	An instrument for advancing inserted bone material in the socket. Main material: Titanium.	Insert the drill into the physiodispenser handpiece. Advance the bone chips deep into the bone cavity.
Bone Carrier	The instrument for carrying the bone chips into the cut hole. Main material: Stainless steel	Fill it with bone material and carry into the bone cavity.
Depth Gauge	The instrument for measuring the depth of the cut hole. The instrument is provided with the measurement scale in increments of 1 mm. Main material: Titanium	Set it into the cavity and measure the depth.

Table 6.2.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm		Appearance
1.	Point drill	SSD20	32,2	2,0		
2.	S-reamer	ICR24	32,0	2,4		
3.	S-reamer	ICR28	32,0	2,8		
4.	S-reamer	ICR32	32,0	3,2		
5.	S-reamer	ICR36	32,0	3,6		
6.	Drill stopper	SKS02	15,0	D1 4,4	D2 4.8	

7.	Drill stopper	SKS03	14,0	D1 4,4	D2 4.8	
8.	Drill stopper	SKS04	13,0	D1 4,4	D2 4.8	
9.	Drill stopper	SKS05	12,0	D1 4,4	D2 4.8	
10.	Drill stopper	SKS06	11,0	D1 4,4	D2 4.8	
11.	Drill stopper	SKS07	10,0	D1 4,4	D2 4.8	
12.	Drill stopper	SKS08	9,0	D1 4,4	D2 4.8	
13.	Drill stopper	SKS09	8,0	D1 4,4	D2 4.8	
14.	Drill stopper	SKS10	7,0	D1 4,4	D2 4.8	
15.	Drill stopper	SKS11	6,0	D1 4,4	D2 4.8	
16.	Bone spreader	SBS20	32,0	2,7		
17.	Bone spreader	SBS30	32,0	3,1		
18.	Bone condenser	SBC01	170,0	-		
19.	Implant Drill for Bone Material Insertion	SBI27	32,0	2,7		
20.	Bone Carrier	JUMBO2	165,0	3,85		

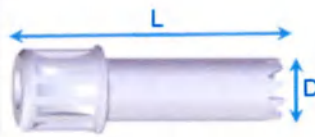
21.	Depth Gauge	SDG00	109,5	2,8	
-----	-------------	-------	-------	-----	---

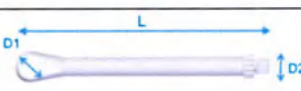
6.3. Submerged Fixture remover kit, item FRKIT

Table 6.3.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Fixture Remover	The instrument for implant extraction from the bone. Main material: Steel	Connect the instrument to the fixture, unscrew the implant fixture counterclockwise, and extract it from the bone.
Fixture remover screw	The instrument for implant fixture extraction from the bone. Main material: Steel	Attach the instrument to the implant fixture, unscrew the implant fixture counterclockwise, and extract it from the bone.
Torque ratchet	The instrument for setting and extracting the implant. Main material: Stainless steel	Connect it to the dynamometer before use.
Torque Wrench	The instrument for setting the implant and measuring the implant extraction torque. The instrument is provided with a measuring scale in increments of 10 and 100 N·cm for torque measurement. Main material: Stainless steel	Connect it to the screwdriver, or the fixture driver, and apply it indirectly for tightening, or loosening the implant.
Hex Driver	The retainer for implant extraction Main material: Steel	Connect it to the implant extraction instrument and extract the implant from the bone using the torque ratchet.

Table 6.3.2. General Dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
1.	Fixture Remover	FR315	22,0	3,7	
2.	Fixture Remover	FR320	27,0	3,7	
3.	Fixture Remover	FR415	22,0	4,6	
4.	Fixture Remover	FR420	27,0	4,6	
5.	Fixture Remover	FR515	22,0	5,3	
6.	Fixture Remover	FR520	27,0	5,3	

7.	Fixture Remover	FR615	22,0	6,2		
8.	Fixture Remover	FR620	27,0	6,2		
9.	Fixture Remover screw	FRS172	15,5	1,85		
10.	Fixture Remover screw	FRS14	15,5	1,4		
11.	Fixture Remover screw	FRS16	15,5	1,6		
12.	Fixture Remover screw	FRS18	15,5	1,8		
13.	Fixture Remover screw	FRS20	15,5	2,0		
14.	Fixture Remover screw	FRS25	14,7	2,5		
15.	Torque ratchet	FRCHT	89,5	D1 9,9	D2 6,0	
16.	Torque Wrench	TW80400	110,84	D1 2,8	D2 1,8	
17.	Hex driver	HDF1607	15,5	D1 7,5	D2 3,0	
18.	Hex driver	HDF1612	19,0	D1 7,5	D2 3,0	
19.	Hex driver	HDF1617	25,5	D1 7,5	D2 2,55	

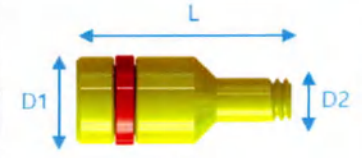
6.4. Kit for removal of broken screws from implants, item SRKIT2.

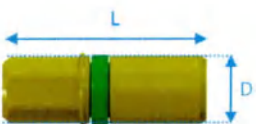
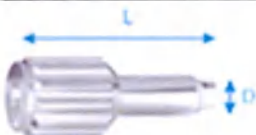
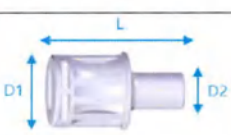
Table 6.4.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Claw	The drill for extraction of broken screws. Main material: Stainless steel	Set the cutter into the physiodispenser handpiece. Fix it in the broken screw zone inside the implant and extract the screw.
Reverse Drill	The drill for extraction of broken screws. Main material: Stainless steel	Set the cutter into the physiodispenser handpiece. Fix it in the broken screw zone inside the implant and extract the screw.
Screw Remover	The instrument for unscrewing a broken screw. Main material: Stainless steel	Insert it into the implant and extract the broken screw.
Drill Guide	The instrument guiding the reverse drill during the screw extraction.	Set it inside the implant prior to using the cutter.

	Main material: Steel	
Conical Guide	The instrument guiding the reverse drill during the screw extraction. Main material: Steel	Set it inside the implant prior to using the cutter.
Internal Guide	The instrument guiding the reverse drill during the screw extraction. Main material: Steel	Set it inside the implant prior to using the cutter.
External Guide	The instrument guiding the reverse drill during the screw extraction. Main material: Steel	Set it inside the implant prior to using the cutter.
Instruments guide	The retainer for the reverse drill guide. Main material: Steel	Set it inside the implant prior to using the cutter.
Guide Holder	The instrument for fixing the drill guides. Main material: Steel	Set it into the implant before using the cutter for extraction of the broken screw.
Ratchet Adapter	The instrument for fixing, pinpointing and extracting the abutment as well as for fixing the abutment former plug. Main material: Steel	Set it together with the abutment upon the implant and fix.

Table 6.4.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm		Appearance
1.	Claw	CD16	33,0	1,05		
2.	Claw	CD18	33,0	1,25		
3.	Claw	CD20	33,0	1,4		
4.	Claw	CD25	33,0	1,85		
5.	Reverse drill	RCD10	31,5	1,0		
6.	Reverse drill	RCD12	31,5	1,2		
7.	Reverse drill	RCD14	31,5	1,4		
8.	Screw remover	SR10	29,0	1,02		
9.	Screw remover	SR12	29,0	1,22		
10.	Screw remover	SR14	29,0	1,42		
11.	Drill guide	PG1018	10,0	D1 4,0	D2 1,0	
12.	Drill guide	PG1220	10,0	D1 4,0	D2 1,2	

13.	Drill guide	PG1425	10,0	D1 4,0	D2 1,4	
14.	Conical guide	CG00	12,0	3,5		
15.	Internal guide	IHG24	12,0	4,3		
16.	Internal guide	IHG25	12,0	4,3		
17.	Internal guide	IOG31	12,0	4,3		
18.	External guide	EHG24	10,5	4,3		
19.	External guide	EHG27	10,5	4,3		
20.	External guide	EHG34	10,5	4,3		
21.	Instruments guide	PGHD25 SS	21,4	2,84		
22.	Guide Holder	GH00	157,0	4,0		
23.	Ratchet Adapter	SHD00	14,0	D1 6,95	D2 3,6	

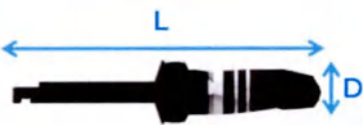
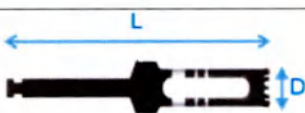
6.5. Surgical kit S-WIDE KIT for implants S-Wide placing, item SWKIT.

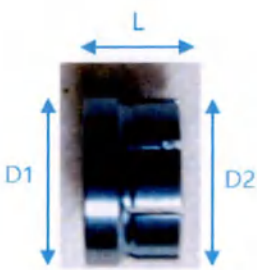
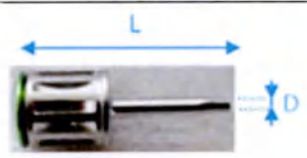
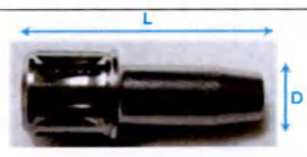
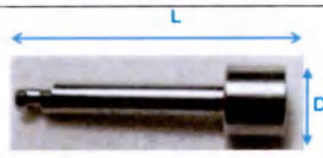
Table 6.5.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
S-Wide Surgical Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
S-Wide Tap Drill	The cutter for thread cutting in the bone to set the implant. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut the thread in the bone hole.
S-Wide Multi-Profile Drill	The bone cutter used for implantation. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon

		the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Trephine Drill	The cutter for bone extraction when setting the implant. Main material: Steel	Set the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it in the bone area and cut out the bone block while cutting a hole in the bone.
S-Wide Drill Stopper	The limiting stop for the cutter. Main material: Titanium.	Set it upon the cutter. It will restrict the cutter penetration depth.
Hex Driver	The driver for fixing the abutment. Main material: Steel	Use the hex driver to fix the abutment to the implant.
Ratchet Connector	The instrument for shaping a hole for an implant in the bone. Main material: Steel	For using cutters with a torque ratchet.
Contra angle connector	The adapter for the cortical tap used for forming the implant site. Main material: Steel	Connect it to the physiodispenser handpiece, insert the cutter, and cut a hole in the bone.

Table 6.5.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm		Appearance
1.	S-Wide Surgical Drill	TSD48	31,5	4,8		
2.	S-Wide Surgical Drill	TSD50	31,5	5,0		
3.	S-Wide Surgical Drill	TSD55	31,5	5,5		
4.	S-Wide Surgical Drill	TSD60	31,5	6,0		
5.	S-Wide Surgical Drill	TSD65	31,5	6,5		
6.	S-Wide Tap Drill	TD55	16,1	5,5		
7.	S-Wide Tap Drill	TD60	16,1	6,0		
8.	S-Wide Tap Drill	TD70	16,1	7,0		
9.	S-Wide Multi-Profile Drill	MP55	28,0	5,75		
10.	S-Wide Multi-Profile Drill	MP60	28,0	6,4		
11.	S-Wide Multi-Profile Drill	MP70	28,0	7,4		
12.	Trephine Drill	TB40	31,0	5,0		
13.	Trephine Drill	TB50	31,0	6,0		
14.	S-Wide Drill Stopper	DSL060	9,50	D1 7,6	D2 7,2	

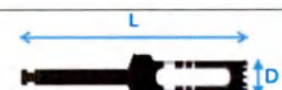
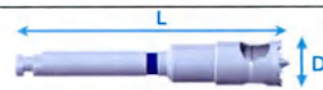
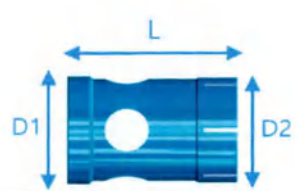
15.	S-Wide Drill Stopper	DSL070	8,20	D1 7,6	D2 7,2	
16.	S-Wide Drill Stopper	DSL085	7,00	D1 7,6	D2 7,2	
17.	S-Wide Drill Stopper	DSL100	5,50	D1 7,6	D2 7,2	
18.	S-Wide Drill Stopper	DSL115	4,00	D1 7,6	D2 7,2	
19.	Hex Driver	HD1212S	19,40	1,19		
20.	Ratchet connector	RC15	23,0	5,0		
21.	Contra angle connector	CAA00	18,0	5,0		

6.6. Surgical kit S-WIDE KIT for implants S-Wide placing, item SWKIT2

Table 6.6.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Surgical drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Trephine Drill	The cutter for bone extraction when setting the implant. Main material: Steel	Set the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it in the bone area and cut out the bone block while cutting a hole in the bone.
Fixture diameter marker	The cutter intended for selection of the implant diameter. Main material: Steel	Choose to match the size of the implants to be set.
Drill Stopper	The limiting stop for the cutter. Main material: Titanium	Set it upon the cutter. It will restrict the cutter penetration depth.

Table 6.6.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm		Appearance
1.	Surgical drill	TSDW50	34,7	5,0		
2.	Surgical drill	TSDW56	34,7	5,6		
3.	Trephine Drill	TB39	32,0	4,65		
4.	Fixture diameter marker	DM45	27,4	4,5		
5.	Drill Stopper	DSW050	11,50	D1 7,8	D2 7,4	
6.	Drill Stopper	DSW060	10,50	D1 7,8	D2 7,4	
7.	Drill Stopper	DSW066	9,90	D1 7,8	D2 7,4	
8.	Drill Stopper	DSW073	9,20	D1 7,8	D2 7,4	
9.	Drill Stopper	DSW085	8,00	D1 7,8	D2 7,4	
10.	Drill Stopper	DSW100	6,50	D1 7,8	D2 7,4	
11.	Drill Stopper	DSW115	5,0	D1 7,8	D2 7,4	

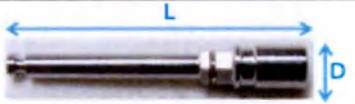
6.7. Surgical kit S-MINI KIT for implants placing, item SMKIT

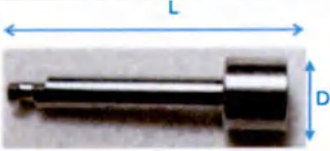
Table 6.7.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Parallel Pin	The instrument for measuring the inclination of the set implant. Main material: Stainless steel	Set it into the bone cavity after using the initial drill.

S-Mini surgical drill	The cutter for shaping the implant site. Main material:Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Fixture Driver	The instrument for setting the implant, fixing the ball abutment and setting the implant with a ratchet wrench. Main material:Steel	Set the implant into the bone with the fixture driver and fix the abutment on the implant.
Ratchet Connector	The instrument for shaping a hole for an implant in the bone. Main material:Steel	For using cutters with a torque ratchet.
Contra angle connector	The adapter for the cortical tap used for forming the implant site. Main material:Steel	Connect it to the physiodispenser handpiece, insert the cutter, and cut a hole in the bone.
S-Mini Guide Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material:Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.

Table 6.7.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
1.	Parallel Pin	MPP10	21,8	1,1	
2.	S-Mini surgical drill	MSD15	37,0	1,5	
3.	S-Mini surgical drill	MSD20	37,0	2,0	
4.	S-Mini surgical drill	MSD25	37,0	2,5	
5.	S-Mini surgical drill	MSD30	37,0	3,0	
6.	Fixture Driver	ISQD20	29,5	4,2	
7.	Fixture Driver	BADH24	26,0	4,0	
8.	Ratchet Connector	RC15	23,0	5,0	

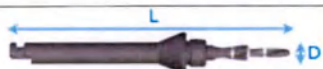
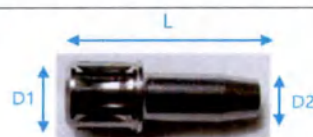
9.	Contra angle connector	CAA00	18,0	5,0	
10.	S-Mini Guide Drill	MGD12	35,0	1,2	

6.8. Surgical kit EZ-GBR KIT for GBR (guided bone regeneration), item EZGBRKIT.

Table 6.8.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
EZ-Screw Fixation Drill	It is used for boring a hole prior to setting the fixing EZ screw. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
EZ-Screw Fixation Drill Stopper	The limiting stop for the cutter. Main material: Polyetheretherketone (PEEK)	Set it upon the cutter. It will restrict the cutter penetration depth.
EZ-Break Driver	The screwdriver. Main material: Steel	Attach it to the screw head and fix the screw in the bone.
EZ-Cover Cap Driver	The instrument for setting the protection cap upon the fixing screw. Main material: Stainless steel.	Set it upon the screw together with the protection cap.
Dual Hex Driver	The screwdriver for fixing the spacer. Main material: Steel	Set the spacer upon the implant and fix it.
Ratchet Connector	The instrument for shaping a hole for an implant in the bone. Main material: Steel	For using cutters with a torque ratchet.
Driver Handle	The instrument for holding the driver. Main material: Aluminum	Insert the driver into the handle and use it manually without the physiodispenser.
Connector EZ-Handle	The instrument for connecting to the handpiece handle. Main material: Steel	Set it upon the handpiece before using the fixing screw.
Philips Head Screwdriver	The screwdriver. Main material: Steel	Fix the screwdriver in the screw head and tighten the screw.
EZ-Phillips Head Driver	The adapter for setting the screws. Main material: Steel	Insert it into the physiodispenser handpiece, fix it on the screw head and tighten the screw with the driver.
EZ-Ti-Mem Push Driver	The instrument for shaping the titanium membrane. Main material: Steel	Apply it for shaping the titanium membrane.

Table 6.8.2. General dimensions.

№	Component of the kit		Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm		Appearance
1.	EZ-Screw Drill	Fixation	EZSFD17	35,00	1,7		
2.	EZ-Screw Drill Stopper	Fixation	EZSFDS050	7,55	D1 4,5	D2 4,05	
3.	EZ-Break Driver		EZBRD	25,40	3,2		
4.	EZ-Cover Cap Driver		EZCCD42	56,80	—		
5.	Dual Hex Driver		DHDC10	27,90	0,95		
6.	Dual Hex Driver		DHDC20	37,90	0,95		
7.	Ratchet Connector		GRC15	22,0	D1 7,5	D2 5,0	
8.	Driver Handle		DRH	110,0	15,0		
9.	Connector EZ-Handle		EZHC12	22,4	5,0		
10.	Philips Screwdriver	Head	PHSD05	20,00	2,0		
11.	Philips Screwdriver	Head	PHSD10	29,65	2,0		
12.	Philips Screwdriver	Head	PHSD20	39,65	2,0		
13.	EZ-Phillips Driver	Head	EZPHD3502	22,00	3,8		
14.	EZ-Phillips Driver	Head	EZPHD3512	32,00	3,5		

15.	EZ-Phillips Driver	Head	EZPHD3520	40,00	3,5	
16.	EZ-Ti-Mem Driver	Push	EZPD68	56,8	—	

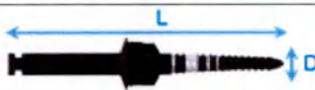
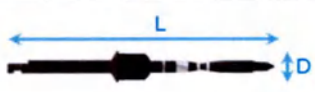
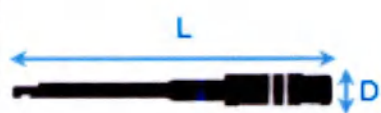
6.9. Surgical kit for implants placing, item ISFFKIT.

Table 6.9.1. Description, order of application.

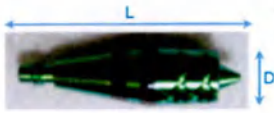
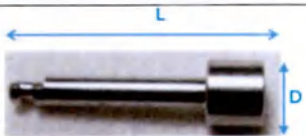
Component of the kit	Description	Order of application
Lindemann Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Surgical Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Cortical Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Cortical Tap	The cutter for thread cutting in the bone to set the implant. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut the thread in the bone hole.
Drill Stopper	The limiting stop for the cutter. Main material: Titanium	Set it upon the cutter. It will restrict the cutter penetration depth.
Hex Driver	The driver for fixing the abutment. Main material: Steel	Use the hex driver to fix the abutment to the implant.
Ratchet Connector	The instrument for shaping a hole for an implant in the bone. Main material: Steel	For using cutters with a torque ratchet.
Screw implant Direction Pin	The instrument for measuring the inclination of the set implant. Main material: Titanium	Screw it into the implant for measuring.
Parallel Pin	The instrument for measuring the inclination of the set implant. Main material: Stainless steel	Set it into the bone cavity after using the initial drill.
Drill Extension	The adapter for lengthening the cutter. Main material: Steel	Insert the cutter used for shaping the implant site into the drill extension.
Torque ratchet	The instrument for setting and extracting the implant. Main material: Steel	Connect it to the dynamometer before use.
Contra angle connector	The adapter for the cortical tap used for forming the implant site. Main material: Steel	Connect it to the physiodispenser handpiece, insert the cutter, and cut a hole in the bone.

Depth Gauge	The instrument for measuring the depth of the cut hole. The instrument is provided with the measurement scale in increments of 1 mm. Main material: Titanium	Set it into the cavity and measure the depth.
Driver Holder	An instrument for handling a hex driver. Main material: Stainless steel	Fix it in the hex driver for handling screws or abutments.
Fixture Driver	The instrument for setting the implant, fixing the ball abutment and setting the implant with a ratchet wrench. Main material: Steel	Set the implant into the bone with the fixture driver and fix the abutment on the implant.

Table 6.9.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
1.	Lindemann Drill	LDS23C	35,8	2,3	
2.	Surgical Drill	TSD22CS	34,7	2,2	
3.	Surgical Drill	TSD22CL	40,7	2,2	
4.	Surgical Drill	TSD30CS	34,7	3,0	
5.	Surgical Drill	TSD30CL	40,7	3,0	
6.	Surgical Drill	TSD35CS	34,7	3,5	
7.	Surgical Drill	TSD35CL	40,7	3,5	
8.	Surgical Drill	TSD40CS	34,7	4,0	
9.	Surgical Drill	TSD40CL	40,7	4,0	
10.	Surgical Drill	TSD45CS	34,7	4,5	
11.	Surgical Drill	TSD45CL	40,7	4,5	
12.	Cortical Drill	ISCD35F	33,0	2,95	
13.	Cortical Drill	ISCD40F	33,0	3,45	
14.	Cortical Drill	ISCD45F	33,0	3,95	
15.	Cortical Drill	ISCD50F	33,0	4,45	

16.	Cortical Tap	PTAP35FS	13,9	3,8		
17.	Cortical Tap	PTAP40FS	13,9	4,3		
18.	Cortical Tap	PTAP45FS	13,9	4,5		
19.	Cortical Tap	PTAP50FS	13,9	5,0		
20.	Drill Stopper	DS030C	16,00	D1 5,5	D2 5,4	
21.	Drill Stopper	DS040C	15,00	D1 5,5	D2 5,4	
22.	Drill Stopper	DS050C	14,00	D1 5,5	D2 5,4	
23.	Drill Stopper	DS060C	13,00	D1 5,5	D2 5,4	
24.	Drill Stopper	DS066C	12,4	D1 5,5	D2 5,4	
25.	Drill Stopper	DS070C	11,7	D1 5,5	D2 5,4	
26.	Drill Stopper	DS085C	10,5	D1 5,5	D2 5,4	
27.	Drill Stopper	DS100C	9,00	D1 5,5	D2 5,4	
28.	Drill Stopper	DS115C	7,50	D1 5,5	D2 5,4	
29.	Drill Stopper	DS130C	6,00	D1 5,5	D2 5,4	
30.	Hex Driver	HD1210S	17,40	7,5		
31.	Hex Driver	HD1215S	22,40	7,5		

32.	Ratchet Connector	RC10	18,0	5,0	
33.	Ratchet Connector	RC15	23,0	5,0	
34.	Screw implant Direction Pin	DPIS35C	15,5	3,5	
35.	Screw implant Direction Pin	DPIS45C	15,5	4,5	
36.	Parallel Pin	PP07F	15,8	4,3	
37.	Parallel Pin	PP08F	18,8	4,3	
38.	Parallel Pin	PP10F	21,8	4,3	
39.	Drill Extension	DE01	29,5	4,5	
40.	Torque ratchet	TW60	101,10	1,7	
41.	Contra angle connector	CAA00	18,0	5,0	
42.	Depth Gauge	DG17	100,9	1,7	
43.	Driver Holder	DH02	157,65	5,9	
44.	Fixture Driver	ISFD05C	27,7	4,0	
45.	Fixture Driver	ISFD05C L	32,7	4,0	
46.	Fixture Driver	ISFD10R	22,7	7,5	
47.	Fixture Driver	ISFD15R	27,7	7,5	

6.10. Surgical accessory kit NEO SURGICAL ACCESSORY KIT for implantation, item ACCKIT.

Table 6.10.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Fixture diameter marker	The cutter intended for selection of the implant diameter. Main material: Steel	Choose to match the size of the implants to be set.
Bone Planer	The cutter for planing the bone irregularities. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece, set it in the supposed implantation zone, and level the bone.
Bone Profiler	The cutter for planing the bone around the implant. Main material: Steel	In cases of an excessive bone growth in the area, where the implant is set, set the cutter into the physiodispenser handpiece and level the bone in the implant area.
Hex driver ratchet	The driver for fixing the plug, the former, and the abutment. Main material: Steel	Set the screwdriver into the physiodispenser handpiece, and tighten the plug, the former, and the abutment.
Tissue Punch	The cutter for cutting a hole in the mucosa. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the mucosa in the surgery area. Cut a hole in the mucosa.
Ratchet Connector	The instrument for shaping a hole for an implant in the bone. Main material: Steel	For using cutters with a torque ratchet.

Table 6.10.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
1.	Fixture diameter marker	DM35	27,4	3,8	
2.	Fixture diameter marker	DM40	27,4	4,3	
3.	Fixture diameter marker	DM45	27,4	4,5	
4.	Fixture diameter marker	DM50	27,4	5,0	
5.	Fixture diameter marker	DM55	27,4	5,5	
6.	Fixture diameter marker	DM60	27,4	6,0	
7.	Bone Planer	BP35	25,4	4,1	
8.	Bone Planer	BP40	25,4	4,6	
9.	Bone Planer	BP50	25,4	5,3	
10.	Bone Planer	BP65	25,4	6,5	
11.	Bone Planer	BP80	25,4	7,95	
12.	Bone Profiler	BPN40	28,9	1,25	
13.	Bone Profiler	BPR50	28,9	1,5	

14.	Bone Profiler	BPI60	28,9	2,05	
15.	Bone Profiler	BPB60	28,9	1,5	
16.	Bone Profiler	ISBP48	34,1	4,8	
17.	Bone Profiler	ISBP55	34,1	5,5	
18.	Bone Profiler	ISBP60	34,1	6,0	
19.	Hex driver ratchet	QTH1215	38,40	1,19	
20.	Hex driver ratchet	QTH12515	38,40	1,26	
21.	Tissue Punch	TP35	30,0	4,3	
22.	Tissue Punch	TP40	30,0	4,8	
23.	Tissue Punch	TP45	30,0	5,3	
24.	Tissue Punch	TP50	30,0	5,8	
25.	Ratchet connector	RC15	23,0	5,0	

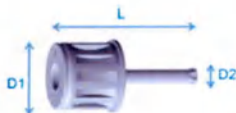
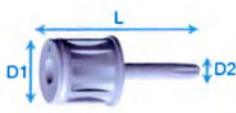
6.11. Universal prosthetic kit for various implant systems, item UVPRTKIT.

Table 6.11.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Hex Driver	The driver for fixing the abutment. Main material: Steel	Use the hex driver to fix the abutment to the implant.
Driver	An instrument for fixing, pinpointing and extraction of an abutment as well as for fixing the healing abutment cover cap. Main material: Steel	Set it together with an abutment upon the implant fixture and fix the connection.
Driver Holder	An instrument for handling a hex driver. Main material: Stainless steel	Fix it in the hex driver for handling screws or abutments.
Torque ratchet	The instrument for setting and extracting the implant. Main material: Stainless steel	Connect it to the dynamometer before use.

Table 6.11.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
1.	Hex Driver	HD1210S	17,40	7,5	

2.	Hex Driver	HD1215S	22,40	7,5		
3.	Hex Driver	HD12510S	17,40	7,5		
4.	Hex Driver	HD12515S	22,40	7,5		
5.	Driver	SCSD10S	17,4	D1 7,5	D2 1,73	
6.	Driver	SCSD15S	22,4	D1 7,5	D2 1,73	
7.	Driver	UGD10S	17,4	D1 7,5	D2 1,7	
8.	Driver	UGD15S	22,4	D1 7,5	D2 1,7	
10.	Driver Holder	DH02	157,65	5,9		
11.	Torque ratchet	TW60	101,10	1,7		

6.12. Prosthetic kit, item PRTKIT.

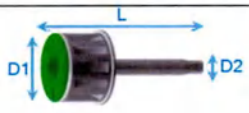
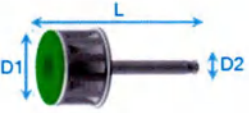
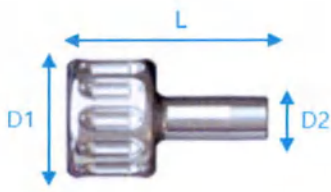
Table 6.12.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Hex Driver	The driver for fixing the abutment. Main material: Steel	Use the hex driver to fix the abutment to the implant.
Hex Driver - Contra Angle Type	A screwdriver for tightening the implant fixture remover screw. Main material: Steel	Use the screwdriver to fix an abutment to the implant fixture.
Hex Driver - Hand Type	A screwdriver for tightening the implant fixture remover screw. Main material: Steel	Set it together with an abutment upon the implant fixture and fix the connection.
Hex Driver - Ratchet Type	An instrument used for connecting or disconnecting the screws and cover screws. Main material: Steel	Set it together with an abutment upon the implant fixture and fix the connection.
Angled Driver	A screwdriver used for setting and extracting the screws at various angles and in various directions. Main material: Titanium	Set it together with an abutment upon the implant fixture and fix the connection.

Abutment Positioner	An instrument used for gripping an abutment after its assembly with a hex driver. Main material: Steel	Set it together with an abutment upon the implant fixture and fix the connection.
Torque ratchet	The instrument for setting and extracting the implant. Main material: Stainless steel	Connect it to the dynamometer before use.

Table 6.12.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm		Appearance
1.	Hex Driver	HD1210S	17,40	7,5		
2.	Hex Driver	HD1215S	22,40	7,5		
3.	Hex Driver	HD1220S	27,40	7,5		
4.	Hex Driver	HD1225S	32,40	7,5		
5.	Hex Driver	HD12510S	17,40	7,5		
6.	Hex Driver	HD12515S	22,40	7,5		
7.	Hex Driver	HD12520S	27,40	7,5		
8.	Hex Driver	HD12525S	32,40	7,5		
9.	Hex Driver - Contra Angle Type	HDC1210	24,50	1,19		
10.	Hex Driver - Contra Angle Type	HDC1215	29,50	1,19		
11.	Hex Driver - Contra Angle Type	HDC12510	24,50	1,26		
12.	Hex Driver - Contra Angle Type	HDC12515	29,50	1,26		
13.	Hex Driver - Hand Type	HDH1220S	30,40	1,19		
14.	Hex Driver - Hand Type	HDH12520S	30,40	1,26		
15.	Hex Driver - Ratchet Type	HD1220RCS	27,4	D1 7,5	D2 1,2	

16.	Hex Driver - Ratchet Type	HD12520RCS	27,4	D1 7,5	D2 1,27	
17.	Angled Driver	HDA1215S	22,4	D1 7,5	D2 1,2	
18.	Angled Driver	HDA1220S	27,4	D1 7,5	D2 1,2	
19.	Angled Driver	HDA12515S	22,4	D1 7,5	D2 1,27	
20.	Angled Driver	HDA12520S	27,4	D1 7,5	D2 1,27	
21.	Abutment Positioner	AP202N	6,00	D1 7,0	D2 2,65	
22.	Abutment Positioner	AP205N	9,00	D1 7,0	D2 2,65	
23.	Abutment Positioner	AP207N	11,00	D1 7,0	D2 2,65	
24.	Abutment Positioner	AP252N	6,00	D1 7,0	D2 2,95	
25.	Abutment Positioner	AP255N	9,00	D1 7,0	D2 2,95	
26.	Abutment Positioner	AP257N	11,00	D1 7,0	D2 2,95	
27.	Torque ratchet	TW60	101,10	1,7		

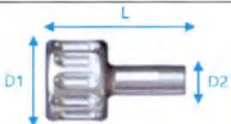
6.13. Neo PickCap Impression kit, item PCIKIT.

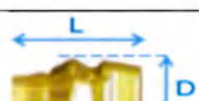
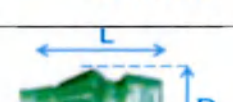
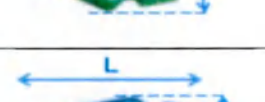
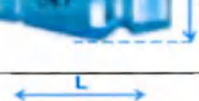
Table 6.13.1. Description, order of application.

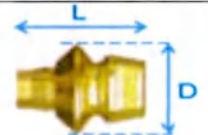
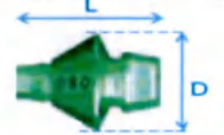
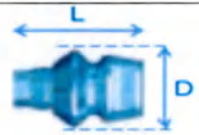
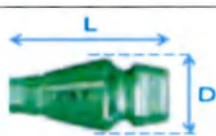
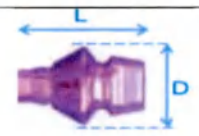
Component of the kit	Description	Order of application
Abutment Positioner	An instrument used for gripping an abutment after its assembly with a hex driver.	Set it together with an abutment upon the implant fixture and fix the connection.

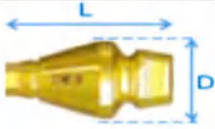
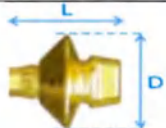
	Main material: Steel	
Hex Driver	The driver for fixing the abutment. Main material: Steel	Use the hex driver to fix the abutment to the implant.
PickCap Impression Body with Pick Cap Impression Screw	It is used for making an impression inside the oral cavity. Main material: Titanium	Attach it to the implant fixture set in the oral cavity and make an occlusion impression.
PickCap Impression Cap	It is used for improving the precision of the impression made. Main material: POLYARYLETHERSULFONE	Attach it to the implant fixture set in the oral cavity and make an occlusion impression.
Pincette	The gripping instrument. Main material: Steel	Use it for holding minor parts.

Table 6.13.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm		Appearance
				D1	D2	
1.	Abutment Positioner	AP165N	9,00	D1 7,0	D2 2,45	
2.	Hex Driver	HD1215S	22,40	7,5		
3.	Hex Driver	HD1220S	27,40	7,5		
4.	Hex Driver	HD1225S	32,40	7,5		
5.	PickCap Impression Body ISPCIB3503 with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB3503	10,0	3,6		
6.	PickCap Impression Body ISPCIB3510with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB3510	17,0	3,6		
7.	PickCap Impression Body ISPCIB4008with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB4008	15,0	4,1		
8.	PickCap Impression Body ISPCIB3505with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB3505	12,0	3,6		
9.	PickCap Impression Body ISPCIB4003with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB4003	10,0	4,1		

10.	PickCap Impression Body ISPCIB4010with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB40 10	17,0	4,1	
11.	PickCap Impression Body ISPCIB3508with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB35 08	15,0	3,6	
12.	PickCap Impression Body ISPCIB4005with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB40 05	12,0	4,1	
13.	PickCap Impression Body ISPCIB403with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB40 3	10,0	4,6	
14.	PickCap Impression Body ISPCIB405with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB40 5	12,0	4,6	
15.	PickCap Impression Body ISPCIB502with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB50 2	9,2	5,3	
16.	PickCap Impression Body ISPCIB505with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB50 5	12,2	5,3	
17.	PickCap Impression Body ISPCIB603with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB60 3	10,2	5,8	
18.	PickCap Impression Body ISPCIB606with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB60 6	13,2	5,8	
19.	PickCap Impression Body ISPCIB704with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB70 4	11,2	6,6	
20.	PickCap Impression Body ISPCIB803with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB80 3	10,2	8,0	
21.	PickCap Impression Body ISPCIB904with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB90 4	11,2	9,0	

22.	PickCap Impression Body ISPCIB408with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB40 8	15,0	4,6	
23.	PickCap Impression Body ISPCIB503with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB50 3	10,2	5,3	
24.	PickCap Impression Body ISPCIB506with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB50 6	13,2	5,3	
25.	PickCap Impression Body ISPCIB604with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB60 4	11,2	5,8	
26.	PickCap Impression Body ISPCIB702with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB70 2	9,2	6,6	
27.	PickCap Impression Body ISPCIB705with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB70 5	12,2	6,6	
28.	PickCap Impression Body ISPCIB804with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB80 4	11,2	8,0	
29.	PickCap Impression Body ISPCIB410with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB41 0	17,0	4,6	
30.	PickCap Impression Body ISPCIB504with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB50 4	11,2	5,3	
31.	PickCap Impression Body ISPCIB602with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB60 2	9,2	5,8	
32.	PickCap Impression Body ISPCIB605with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB60 5	12,2	5,8	
33.	PickCap Impression Body ISPCIB703with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB70 3	10,2	6,6	

34.	PickCap Impression Body ISPCIB706with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB70 6	13,2	6,6	
35.	PickCap Impression Body ISPCIB903with Pick Cap Impression Screw ISPCIS20	ISPCIB90 3	10,2	9,0	
36.	PickCap Impression Cap	PCISC01	4,4	5,25	
37.	PickCap Impression Cap	PCILC01	4,4	6,6	
38.	Pincette	PCIPC	164	-	

6.14. Surgical kit NEO NAVIGUIDE KIT for placing of implants with plugs for surgical guides NEO NAVIGUIDE KIT, item NEONGKIT.

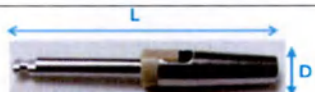
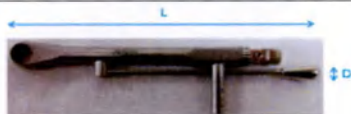
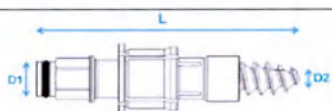
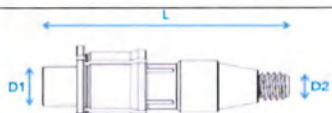
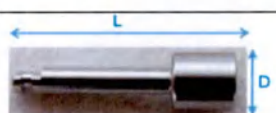
Table 6.14.1. Description, order of application.

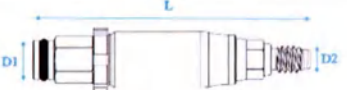
Component of the kit	Description	Order of application
Initial Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Taper Drill	It is used after final drilling for expanding the hole for easier insertion of the implant fixture head. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Point Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Cortical Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Cortical Tap	The cutter for thread cutting in the bone to set the implant. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut the thread in the bone hole.
Bone Trimmer	The cutter for leveling the excessive bone grown in the area surrounding the set implant. Main material: Steel	Set the cutter into the physiodispenser handpiece and level the bone in the implant area.
Bone Profiler	The cutter for planing the bone around the implant. Main material: Steel	In cases of an excessive bone growth in the area, where the implant is set, set the

		cutter into the physiodispenser handpiece and level the bone in the implant area.
Hex Driver	Driver для фиксации абатмента Main material: Steel	С помощью отвертки шестигранной зафиксировать абатмент к имплантату
Tissue Punch	The cutter for cutting a hole in the mucosa. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the mucosa in the surgery area. Cut a hole in the mucosa.
Drill Extension	The adapter for lengthening the cutter. Main material: Steel	Insert the cutter used for shaping the implant site into the drill extension.
Torque ratchet	The instrument for setting and extracting the implant. Main material: Stainless steel	Connect it to the dynamometer before use.
Vertical Anchor	The instrument for fixing the removable template in the implant during the implantation and in the bone during the implantation with screw retention. Main material: Titanium	Fix it in the implant through a hole in the surgical template.
Contra connector angle	The adapter for the cortical tap used for forming the implant site. Main material: Steel	Connect it to the physiodispenser handpiece, insert the cutter, and cut a hole in the bone.
Ratchet Connector	The instrument for shaping a hole for an implant in the bone. Main material: Steel	For using cutters with a torque ratchet.
Fixture Adapter with Stopper	After fixture implantation and surgical guide removal, use fixture driver to measure the fixture's implantation torque value of for additional implantation. Main material: Titanium	Fix it in the implant, when a surgical template is used.
Fixture Adapter without Stopper	After fixture implantation and surgical guide removal, use fixture driver to measure the fixture's implantation torque value of for additional implantation. Main material: Titanium	Fix it in the implant, when a surgical template is used.
Fixture Adapter Removal Tool	The instrument used to extract the fixture driver from the implant. Main material: Steel	Screw it into the fixture driver, if it gets stuck inside the implant.
Fixture Driver	The instrument for setting the implant, fixing the ball abutment and setting the implant with a ratchet wrench. Main material: Steel	Set the implant into the bone with the fixture driver and fix the abutment on the implant.

Table 6.14.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
1.	Initial Drill	NGTWD2207	32,5	2,2	
2.	Initial Drill	NGTWD2208	33,7	2,2	
3.	Initial Drill	NGTWD2210	35,2	2,2	
4.	Initial Drill	NGTWD2211	36,7	2,2	
5.	Initial Drill	NGTWD2213	38,2	2,2	
6.	Taper drill	NGTD3007	32,5	3,0	
7.	Taper drill	NGTD3008	33,7	3,0	
8.	Taper drill	NGTD3010	35,2	3,0	
9.	Taper drill	NGTD3011	36,7	3,0	
10.	Taper drill	NGTD3013	38,2	3,0	
11.	Taper drill	NGTD3507	32,5	3,5	
12.	Taper drill	NGTD3508	33,7	3,5	
13.	Taper drill	NGTD3510	35,2	3,5	
14.	Taper drill	NGTD3511	36,7	3,5	
15.	Taper drill	NGTD3513	38,2	3,5	
16.	Taper drill	NGTD4007	32,5	4,0	
17.	Taper drill	NGTD4008	33,7	4,0	
18.	Taper drill	NGTD4010	35,2	4,0	
19.	Taper drill	NGTD4011	36,7	4,0	
20.	Taper drill	NGTD4013	38,2	4,0	
21.	Taper drill	NGTD4507	32,5	4,5	
22.	Taper drill	NGTD4508	33,7	4,5	
23.	Taper drill	NGTD4510	35,2	4,5	
24.	Taper drill	NGTD4511	36,7	4,5	

25.	Taper drill	NGTD4513	38,2	4,5			
26.	Point Drill	NGPD22	32,7	2,2			
27.	Cortical Drill	NGCD40F	32,5	3,45			
28.	Cortical Drill	NGCD45F	32,5	3,95			
29.	Cortical Drill	NGCD50F	32,5	4,45			
30.	Cortical Tap	NGISCT40R	21,2	4,3			
31.	Cortical Tap	NGISCT45R	21,2	4,5			
32.	Cortical Tap	NGISCT50 W	21,2	5,0			
33.	Bone Trimmer	NGBT00	25,00	5,17			
34.	Bone Trimmer	NGBT15	26,50	5,17			
35.	Bone Trimmer	NGBT30	28,00	5,17			
36.	Bone Profiler	ISBP55	34,1	5,5			
37.	Bone Profiler	ISBP60	34,1	6,0			
38.	Hex Driver	HD1215S	22,40	7,5			
39.	Tissue Punch	NGTP43R	26,5	4,3			
40.	Drill Extension	DE01	29,5	4,5			
41.	Torque ratchet	TW60	101,10	1,7			
42.	Vertical Anchor	SGVABRW	20,7	D1 5,8	D2 3,7		
43.	Vertical Anchor	SGISVAFR W	16,6	D1 5,8	D2 3,3		
44.	Contra connector angle	SGCAC00	19,5	5,0			

45.	Ratchet Connector	SGRC10	17,0	7,5		
46.	Fixture Adapter with Stopper	SGISFARW	19,5	D1 2,85	D2 1,95	
47.	Fixture Adapter without Stopper	SGISFARW 30	21,5	D1 2,85	D2 1,95	
48.	Fixture Adapter Removal Tool	SGFART20	30,30	D1 7,5	D2 1,95	
49.	Fixture Driver	NGISFDR	30,0	3,34		
50.	Fixture Driver	NGISFDCA	32,5	5,17		

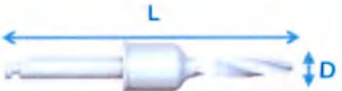
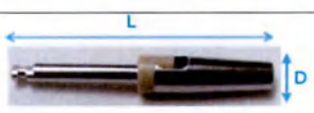
6.15. Mini-guide kit for IS-II active, IS-III active systems implants, item NEONGNKIT.

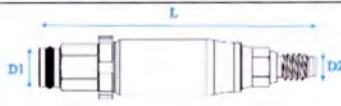
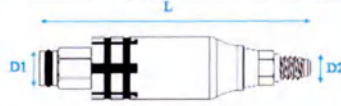
Table 6.15.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Initial Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Taper Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Point Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Cortical Tap	The cutter for thread cutting in the bone to set the implant. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut the thread in the bone hole.
Drill Extension	The adapter for lengthening the cutter. Main material: Steel	Insert the cutter used for shaping the implant site into the drill extension.
Contra angle connector	The adapter for the cortical tap used for forming the implant site. Main material: Steel	Connect it to the physiodispenser handpiece, insert the cutter, and cut a hole in the bone.
Ratchet Connector	The instrument for shaping a hole for an implant in the bone. Main material: Steel	For using cutters with a torque ratchet.

Fixture Adapter	It is used after implantation and surgical guide removal for additional fixation. Main material: Titanium	Fix it in the implant fixture while using the surgical template.
Fixture Driver	The instrument for setting the implant, fixing the ball abutment and setting the implant with a ratchet wrench. Main material: Steel	Set the implant into the bone with the fixture driver and fix the abutment on the implant.

Table 6.15.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
1.	Initial drill	NGTWD2208N	33,7	2,2	
2.	Initial drill	NGTWD2210N	35,2	2,2	
3.	Initial drill	NGTWD2211N	36,7	2,2	
4.	Initial drill	NGTWD2213N	38,2	2,2	
5.	Initial drill	NGTWD2214N	39,7	2,2	
6.	Taper drill	NGTD3008N	33,7	3,0	
7.	Taper drill	NGTD3010N	35,2	3,0	
8.	Taper drill	NGTD3011N	36,7	3,0	
9.	Taper drill	NGTD3013N	38,2	3,0	
10.	Taper drill	NGTD3014N	39,7	3,0	
11.	Point drill	NGPD22N	32,7	2,2	
12.	Cortical Tap	NGISCT35N	21,2	3,8	
13.	Cortical Tap	NGISCT35NS	21,2	3,8	
14.	Drill Extension	DE01	29,5	4,5	

15.	Contra connector	angle	SGCAC00	19,5	5,0		
16.	Ratchet Connector		SGRC10	17,0	7,5		
17.	Fixture Adapter		SGISFAN	19,5	D1 2,85	D2 1,95	
18.	Fixture Adapter		SGISFAN30	21,5	D1 2,85	D2 1,95	
19.	Fixture Driver		NGISFDRN	29,6	3,19		
20.	Fixture Driver		NGISFDCAN	32,1	4,07		

6.16. Stop drill kit, item STOPDRILLKIT.

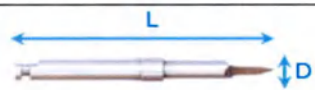
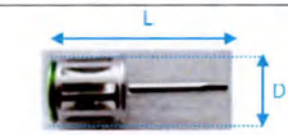
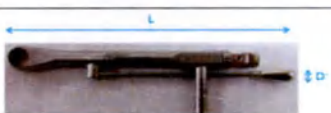
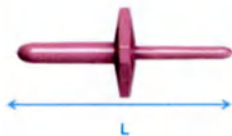
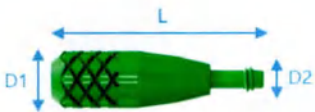
Table 6.16.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Stop Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Titanium	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Point Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Hex Driver	The driver for fixing the abutment. Main material: Steel	Use the hex driver to fix the abutment to the implant.
Drill Extension	The adapter for lengthening the cutter. Main material: Steel	Insert the cutter used for shaping the implant site into the drill extension.
Ratchet Connector	The instrument for shaping a hole for an implant in the bone. Main material: Steel	For using cutters with a torque ratchet.
Torque ratchet	The instrument for setting and extracting the implant. Main material: Steel	Connect it to the dynamometer before use.
Spacer	The instrument, which is set upon the parallel pin for fixing the distance between holes bored in the bone tissue, forms the space set by the spacer size. Main material: Silicone	Set the spacer of the required diameter upon the parallel pin.

Parallel Pin	The instrument for measuring the inclination of the set implant. Main material: Stainless steel	Set it into the bone cavity after using the initial drill.
Screw Implant Direction Pin	The instrument for measuring the inclination of the set implant. Main material: Titanium	Screw it into the implant for measuring.
Driver Holder & Depth Gauge	The instrument for handling the hex driver and measuring the depth of the cut hole. Main material: Stainless steel	Fix it inside the hex driver for handling the screws or the abutments. Set the depth gauge into the cavity, and measure the depth.

Table 6.16.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
1.	Stop Drill	TSD2207F3	34,7	2,2	
2.	Stop Drill	TSD2208F3	34,7	2,2	
3.	Stop Drill	TSD2210F3	34,7	2,2	
4.	Stop Drill	TSD2211F3	34,7	2,2	
5.	Stop Drill	TSD2213F3	34,7	2,2	
6.	Stop Drill	TSD3007F3	34,7	3,0	
7.	Stop Drill	TSD3008F3	34,7	3,0	
8.	Stop Drill	TSD3010F3	34,7	3,0	
9.	Stop Drill	TSD3011F3	34,7	3,0	
10.	Stop Drill	TSD3013F3	34,7	3,0	
11.	Stop Drill	TSD3507F3	34,7	3,5	
12.	Stop Drill	TSD3508F3	34,7	3,5	
13.	Stop Drill	TSD3510F3	34,7	3,5	
14.	Stop Drill	TSD3511F3	34,7	3,5	
15.	Stop Drill	TSD3513F3	34,7	3,5	
16.	Stop Drill	TSD4007F3	34,7	4,0	
17.	Stop Drill	TSD4008F3	34,7	4,0	
18.	Stop Drill	TSD4010F3	34,7	4,0	

19.	Stop Drill	TSD4011F3	34,7	4,0		
20.	Stop Drill	TSD4013F3	34,7	4,0		
21.	Stop Drill	TSD4507F3	34,7	4,5		
22.	Stop Drill	TSD4508F3	34,7	4,5		
23.	Stop Drill	TSD4510F3	34,7	4,5		
24.	Stop Drill	TSD4511F3	34,7	4,5		
25.	Stop Drill	TSD4513F3	34,7	4,5		
26.	Point Drill	PD13	30,0	1,35		
27.	Hex Driver	HD1215S	22,40	7,5		
28.	Drill Extension	DE01	29,5	4,5		
29.	Ratchet Connector	RC10	18,0	5,0		
30.	Torque ratchet	TW60	101,10	1,7		
31.	Spacer	MDS4025	2,5	4,0		
32.	Spacer	MDS7030	3,0	7,0		
33.	Spacer	MDS8030	3,0	8,0		
34.	Parallel Pin	MDPP4050	21,5	-		
35.	Parallel Pin	MDPP6070	18,5	-		
36.	Parallel Pin	MDPP8090	15,5	-		
37.	Screw Implant Direction Pin	DP36	15,9	D1 3,6	D2 1,95	
38.	Screw Implant Direction Pin	DP45	15,9	D1 4,5	D2 1,95	

39.	Driver Holder & Depth Gauge	DHDG	152,23	D1 1,7	D2 7,6	
-----	-----------------------------	------	--------	-----------	-----------	---

6.17. Prosthetic Planning KIT, item PRTPNKIT.

Table 6.17.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Prosthetic Planning-Straight	The device for choosing orthopedic components for restoration on implants. Main material: Titanium	Set a prosthetic planning into the implant. Check up the conformity of a prosthetic planning height and diameter.
Prosthetic Planning-Angled	The device for choosing orthopedic components for restoration on implants. Main material: Titanium	Set a prosthetic planning into the implant. Check up the conformity of a prosthetic planning height and diameter.

Table 6.17.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Angle, °	Appearance
1.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH415	12,35	4,5	-	
2.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH515	12,35	5,2		
3.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH615	12,35	5,7		
4.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH715	12,35	6,5		
5.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH425	13,35	4,5		
6.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH525	13,35	5,2		
7.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH625	13,35	5,7		
8.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH725	13,35	6,5		
9.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH435	14,35	4,5		
10.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH535	14,35	5,2		
11.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH635	14,35	5,7		
12.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH735	14,35	6,5		
13.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH445	15,35	4,5		

14.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH545	15,35	5,2		
15.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH645	15,35	5,7		
16.	Prosthetic Planning-Straight	PISAH745	15,35	6,5		
17.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHA14 27	14,80	4,5	15	
18.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHA14 47	16,80	4,5		
19.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHB14 27	14,80	4,5		
20.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHB14 47	16,80	4,5		
21.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHA15 27	14,80	5,2		
22.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHA15 47	16,80	5,2		
23.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHB15 27	14,80	5,2		
24.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHB15 47	16,80	5,2		
25.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHA16 27	14,80	5,7		
26.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHA16 47	16,80	5,7		
27.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHB16 27	14,80	5,7		
28.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHB16 47	16,80	5,7		
29.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHA24 27	14,80	4,5	25	
30.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHA24 47	16,80	4,5		
31.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHB24 27	14,80	4,5		
32.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHB24 47	16,80	4,5		



33.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHA25 27	14,80	5,2		
34.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHA25 47	16,80	5,2		
35.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHB25 27	14,80	5,2		
36.	Prosthetic Planning-Angled	PISAHB25 47	16,80	5,2		

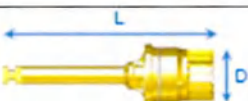
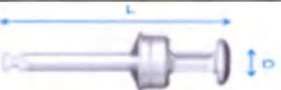
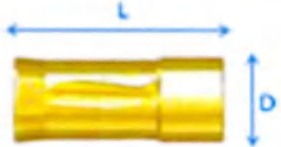
6.18. Sinus lifting kit, item SAKIT.

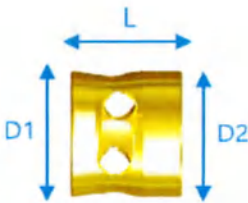
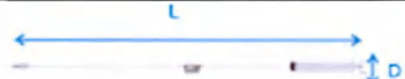
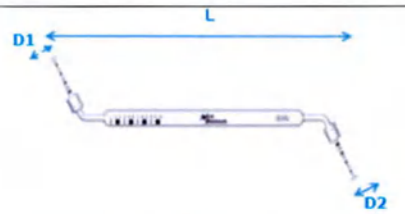
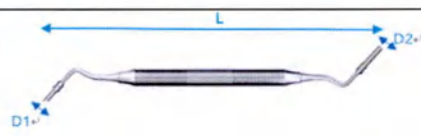
Table 6.18.1. Description, order of application.

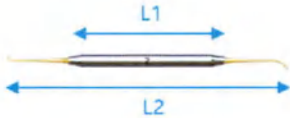
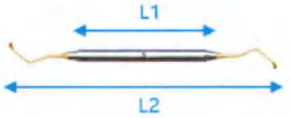
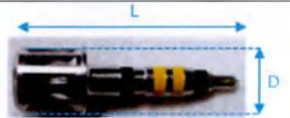
Component of the kit	Description	Order of application
Initial Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Surgical Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
S-reamer	The cutter for forming an access to the maxillary sinus. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
C-Reamer	The cutter for bone block formation. Main material: Steel	Set the cutter into the physiodispenser handpiece. Place it into the maxillary sinus and cut out the bone block while forming an access to the sinus.
C-Guide Reamer	A bone-punching drill. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole inside the bone.
LS-reamer	A drill for bone stripping without damaging the sinus membrane. Main material: Steel	Insert the drill into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Side Cutter	The cutter for expanding the bone hole. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Crestal Stopper	The limiting stop for the cutter. Main material: Titanium	Set it upon the cutter. It will restrict the cutter penetration depth.
Lateral Stopper	The limiting stop for the lateral cutter. Main material: Titanium	Set it upon the cutter. It will restrict the cutter penetration depth.
Aqua Tap	The device for the liquid supply into the sinus under the membrane.	Set the device into the bone cavity at the site of access to the sinus, attach the hose

	Main material: Steel	connected to the syringe, hydroseparate the membrane of the maxillary sinus using the liquid pushed out of the syringe under pressure.
Aqua System	Devices designed for combined use with the aqua tap in sinus lifting and consisting of the syringe connector (AQSRGC) and the flexible hose (AQHST) for connection to the syringe. Main material: Polyetheretherketone (PEEK)	Attach the flexible hose (AQHST) to the aqua tap for feeding liquid through the syringe connector (AQSRGC) connected to the syringe. Perform the hydroseparation of the maxillary sinus membrane using liquid injected by pressure from the syringe.
Depth Gauge	The instrument for measuring the depth of the cut hole. The instrument is provided with the measurement scale in increments of 1 mm. Main material: Titanium	Set it into the cavity and measure the depth.
Bone Carrier	The instrument for carrying the bone chips into the cut hole. Main material: Stainless steel	Fill it with bone material and carry into the bone cavity.
Bone Condenser	The instrument for compacting introduced bone chips. Main material: Stainless steel	Use this instrument for packing and compacting bone chips.
Drill Handle	The drill holding instrument. Main material: Aluminum	For using cutters without the angled handpiece of the physiodispenser. Insert the drill into the handle and use it manually.
Rotary Elevator	The instrument combining the functions of a bone spreader and a bone carrier. Main material: Steel	Set the elevator into the physiodispenser handpiece, and use it for mechanical lifting of the maxillary sinus bottom.
Sinus Elevator	The curette for separation of the maxillary sinus mucosa. Main material: Steel	Separate the sinus mucosa with the curette through a hole cut in the bone.
Torque ratchet	The instrument for setting and extracting the implant. Main material: Steel	Connect it to the dynamometer before use.
Hex Driver	The driver for fixing the abutment. Main material: Steel	Use the hex driver to fix the abutment to the implant.
Fixture Driver	The instrument for setting the implant, fixing the ball abutment and setting the implant with a ratchet wrench. Main material: Steel	Set the implant into the bone with the fixture driver and fix the abutment on the implant.

Table 6.18.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
1.	Initial Drill	SAD22	31,7	2,2	
2.	Surgical drill	SAD28	31,5	2,8	
3.	Surgical drill	SAD32	31,5	3,2	
4.	Surgical drill	SAD37	31,5	3,7	
5.	Surgical drill	SAD40	31,5	4,0	
6.	S-reamer	SASR28	32,0	2,8	
7.	S-reamer	SASR32	32,0	3,2	
8.	S-reamer	SASR36	32,0	3,6	
9.	S-reamer	SASR39	32,0	3,9	
10.	C-reamer	SAC640	27,5	6,5	
11.	C-Guide Reamer	SACG610	27,5	7,8	
12.	LS-reamer	SALS640	27,6	6,5	
13.	Side Cutter	SCT30	24,2	2,74	
14.	Crestal Stopper	CDS010	16,00	5,6	
15.	Crestal Stopper	CDS020	15,00	5,6	
16.	Crestal Stopper	CDS030	14,00	5,6	
17.	Crestal Stopper	CDS040	13,00	5,6	
18.	Crestal Stopper	CDS050	12,00	5,6	
19.	Crestal Stopper	CDS060	11,00	5,6	
20.	Crestal Stopper	CDS070	10,00	5,6	
21.	Crestal Stopper	CDS080	9,00	5,6	

22.	Crestal Stopper	CDS090	8,00	5,6	
23.	Crestal Stopper	CDS100	7,00	5,6	
24.	Crestal Stopper	CDS110	6,00	5,6	
25.	Crestal Stopper	CDS120	5,00	5,6	
26.	Lateral Stopper	LTS010	6,70	D1, D2 7,85	
27.	Lateral Stopper	LTS020	5,70	D1, D2 7,85	
28.	Lateral Stopper	LTS030	4,70	D1, D2 7,85	
29.	Lateral Stopper	LTS040	3,70	D1, D2 7,85	
30.	Aqua Tap	AQT	22,0	4,22	
31.	Aqua System	AQST	390,0	11,5	
32.	Depth Gauge	SADG01	125,2	D1 2,6 D2 3,1	
33.	Bone Carrier	JUMBO2	165,0	8,0	
34.	Bone Condenser	SABC01	170,0	D1 1,5 D2 2,2	
35.	Drill Handle	SADH01	141,0	4,5	
36.	Rotary Elevator	SARE28	33,3	2,7	
37.	Rotary Elevator	SARE32	33,3	3,1	
38.	Rotary Elevator	SARE36	33,3	3,5	

39.	Rotary Elevator	SARE39	33,3	3,8	
40.	Sinus Elevator	SLE01	L1 106,0 L2 168,0	-	
41.	Sinus Elevator	SLE02	L1 106,0 L2 181,0	-	
42.	Sinus Elevator	SLE03	L1 106,0 L2 184,0	-	
43.	Torque ratchet	TW60	101,1	1,7	
44.	Hex Driver	HD1215S	22,4	7,5	
45.	Fixture Driver	ISFD05C	27,7	4,0	
46.	Fixture Driver	ISFD10R	22,7	7,5	
47.	Fixture Driver	ISFD15R	27,7	7,5	

6.19. Ridge Wider kit, item RWKIT.

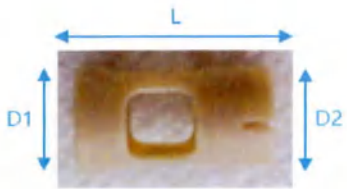
6.19.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Screw Fixation Drill	The instrument for setting the fixing implant. Main material: Steel	Set the cutter into the physiodispenser handpiece, and cut a hole in the bone for the fixing screw.
Bone Trimmer	The cutter for leveling the excessive bone grown in the area surrounding the set implant. Main material: Steel	Set the cutter into the physiodispenser handpiece and level the bone in the implant area.

Bone Expander	The instrument for expanding the bone tissue. Main material: Steel	Set it into the physiodispenser handpiece, and screw it into the bone tissue, until the hole is expanded.
Safe Disk - Non-Saw Type	The disk-shaped cutter for sawing off a bone block in bone grafting. Main material: Stainless steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece, and apply it in the bone area.
Screw Fixation Drill Stopper	The limiting stop for the cutter. Main material: Polyetheretherketone (PEEK)	Set the stop upon the cutter to limit the cutter depression.
Ratchet Connector	The instrument for shaping a hole for an implant in the bone. Main material: Steel	For using cutters with a torque ratchet.
Bone Chisel	The instrument for expanding the gingival crest. Main material: Stainless steel	Use the chisel for splitting the narrow gingival crest.

6.19.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
1.	Screw Fixation Drill	SFD15	35,0	1,5	
2.	Bone Trimmer	BTRI6010	30,0	6,0	
3.	Bone Expander	BEXP30	32,8	3,0	
4.	Bone Expander	BEXP35	32,8	3,5	
5.	Bone Expander	BEXP40	32,8	4,0	
6.	Bone Expander	BEXP45	32,8	4,5	
7.	Bone Expander	BEXP50	32,8	5,0	
8.	Safe Disk - Non-Saw Type	SAWD0703N	24,8	-	
9.	Safe Disk - Non-Saw Type	SAWD1003N	24,8	-	
10.	Safe Disk - Non-Saw Type	SAWD1303N	24,8	-	

11.	Safe Disk - Non-Saw Type	SAWD0710N	25,75	-		
12.	Screw Fixation Drill Stopper	SFDS030	9,5	D1 4,05	D2 4,5	
13.	Screw Fixation Drill Stopper	SFDS050	7,5	D1 4,05	D2 4,5	
14.	Screw Fixation Drill Stopper	SFDS070	5,5	D1 4,05	D2 4,5	
15.	Ratchet Connector	RC15	23,0	5,0		
16.	Bone Chisel	BCHI60	141,1	-		

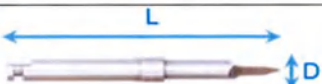
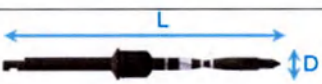
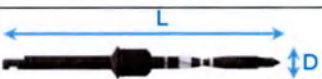
6.20. Neo Master KIT, item NEOMKIT.

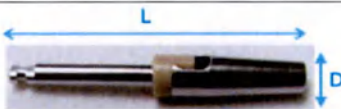
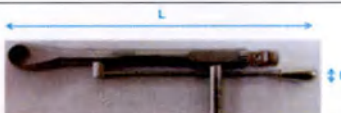
Table 6.20.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Point Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Surgical Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Drill Stopper	The limiting stop for the cutter. Main material: Titanium	Set it upon the cutter. It will restrict the cutter penetration depth.
Spacer	The instrument, which is set upon the parallel pin for fixing the distance between holes bored in the bone tissue, forms the space set by the spacer size. Main material: Silicone	Set the spacer of the required diameter upon the parallel pin.
Parallel Pin	The instrument for measuring the inclination of the set implant. Main material: Stainless steel	Set it into the bone cavity after using the initial drill.
Drill Extension	The adapter for lengthening the cutter. Main material: Steel	Insert the cutter used for shaping the implant site into the drill extension.
Torque ratchet	The instrument for setting and extracting the implant. Main material: Steel	Connect it to the dynamometer before use.
Ratchet Connector	The instrument for shaping a hole for an implant in the bone.	For using cutters with a torque ratchet.

	Main material: Steel	
Screw Implant Direction Pin	The instrument for measuring the inclination of the set implant. Main material: Titanium	Screw it into the implant for measuring.
Hex Driver	The driver for fixing the abutment. Main material: Steel	Use the hex driver to fix the abutment to the implant.
Driver Holder & Depth Gauge	The instrument for handling the hex driver and measuring the depth of the cut hole. Main material: Stainless steel	Fix it inside the hex driver for handling the screws or the abutments. Set the depth gauge into the cavity, and measure the depth.

Table 6.20.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm		Appearance
1.	Point Drill	PD13	30,0	1,35		
2.	Surgical drill	TSD22CL	40,7	2,2		
3.	Surgical drill	TSD30CL	40,7	3,0		
4.	Surgical drill	TSD35CL	40,7	3,5		
5.	Surgical drill	TSD40CL	40,7	4,0		
6.	Surgical drill	TSD45CL	40,7	4,5		
7.	Surgical drill	TSD22CS	34,7	2,2		
8.	Surgical drill	TSD30CS	34,7	3,0		
9.	Surgical drill	TSD35CS	34,7	3,5		
10.	Surgical drill	TSD40CS	34,7	4,0		
11.	Surgical drill	TSD45CS	34,7	4,5		
12.	Drill Stopper	DS030C	16,0	D1 5,5	D2 5,4	
13.	Drill Stopper	DS040C	15,0	D1 5,5	D2 5,4	
14.	Drill Stopper	DS050C	14,0	D1 5,5	D2 5,4	

15.	Drill Stopper	DS060C	13,0	D1 5,5	D2 5,4	
16.	Drill Stopper	DS066C	12,4	D1 5,5	D2 5,4	
17.	Drill Stopper	DS070C	11,7	D1 5,5	D2 5,4	
18.	Drill Stopper	DS085C	10,5	D1 5,5	D2 5,4	
19.	Drill Stopper	DS100C	9,0	D1 5,5	D2 5,4	
20.	Drill Stopper	DS115C	7,5	D1 5,5	D2 5,4	
21.	Drill Stopper	DS130C	6,0	D1 5,5	D2 5,4	
22.	Spacer	MDS4025	2,5	4,0		
23.	Spacer	MDS7030	3,0	7,0		
24.	Spacer	MDS8030	3,0,	8,0		
25.	Parallel pin	MDPP4050	21,5	-		
26.	Parallel pin	MDPP6070	18,5	-		
27.	Parallel pin	MDPP8090	15,5	-		
28.	Drill Extension	DE01	29,5	4,5		
29.	Torque ratchet	TW60	101,1	1,7		
30.	Ratchet Connector	RC10	18,0	5,0		
31.	Ratchet Connector	RC15	23,0	5,0		
32.	Screw Implant Direction Pin	DP36	15,9	D1	D2	

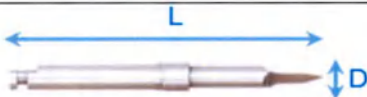
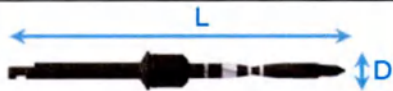
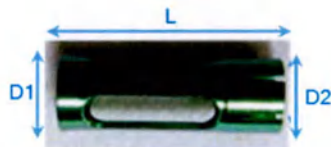
				3,6	1,95	
33.	Screw Implant Direction Pin	DP45	15,9	D1 4,5	D2 1,95	
34.	Hex Driver	HD1210S	17,4	7,5		
35.	Hex Driver	HD1215S	22,4	7,5		
36.	Driver Holder & Depth Gauge	DHDG	152,23	D1 1,7	D2 7,6	

6.21. Neo Core kit, item NEOCKIT.

Table 6.21.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Point Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Surgical Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Drill Stopper	The limiting stop for the cutter. Main material: Titanium	Set it upon the cutter. It will restrict the cutter penetration depth.
Parallel Pin	The instrument for measuring the inclination of the set implant. Main material: Stainless steel	Set it into the bone cavity after using the initial drill.
Torque ratchet	The instrument for setting and extracting the implant. Main material: Steel	Connect it to the dynamometer before use.
Ratchet Connector	The instrument for shaping a hole for an implant in the bone. Main material: Steel	For using cutters with a torque ratchet.
Drill Extension	The adapter for lengthening the cutter. Main material: Steel	Insert the cutter used for shaping the implant site into the drill extension.
Hex Driver	The driver for fixing the abutment. Main material: Steel	Use the hex driver to fix the abutment to the implant.
Fixture Driver	The instrument for setting the implant, fixing the ball abutment and setting the implant with a ratchet wrench. Main material: Steel.	Set the implant into the bone with the fixture driver and fix the abutment on the implant.

6.21.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm		Appearance
1.	Point Drill	PD13	30,0	1,35		
2.	Surgical drill	TSD22CS	34,7	2,2		
3.	Surgical drill	TSD30CS	34,7	3,0		
4.	Surgical drill	TSD35CS	34,7	3,5		
5.	Surgical drill	TSD40CS	34,7	4,0		
6.	Surgical drill	TSD45CS	34,7	4,5		
7.	Drill Stopper	DS070C	11,7	D1 5,5	D2 5,4	
8.	Drill Stopper	DS085C	10,5	D1 5,5	D2 5,4	
9.	Drill Stopper	DS100C	9,00	D1 5,5	D2 5,4	
10.	Drill Stopper	DS115C	7,50	D1 5,5	D2 5,4	
11.	Drill Stopper	DS130C	6,00	D1 5,5	D2 5,4	
12.	Parallel Pin	PP08F	18,8	4,3		
13.	Parallel Pin	PP10F	21,8	4,3		
14.	Torque ratchet	TW60	101,10	1,7		
15.	Ratchet Connector	RC15	23,0	5,0		
16.	Drill Extension	DE01	29,5	4,5		

17.	Hex Driver	HD1215S	22,40	7,5	
18.	Fixture Driver	ISFD05C	27,7	4,0	

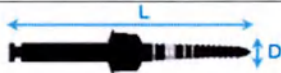
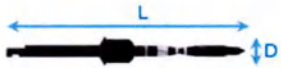
6.22. Neo surgical kit for implant placing, item NEOSKIT.

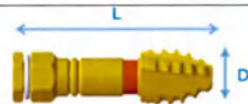
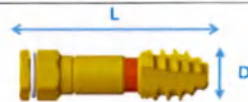
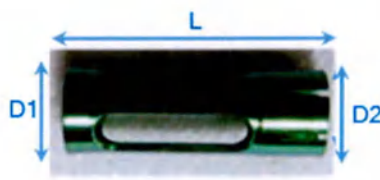
Table 6.22.1. Description, order of application.

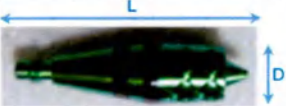
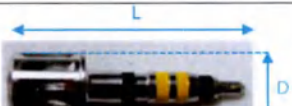
Component of the kit	Description	Order of application
Lindemann Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Surgical Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Cortical Drill	The cutter for shaping the implant site. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut a hole in the bone.
Cortical Tap	The cutter for thread cutting in the bone to set the implant. Main material: Steel	Insert the cutter into the physiodispenser handpiece. Set it upon the bone in the surgery area. Cut the thread in the bone hole.
Drill Stopper	The limiting stop for the cutter. Main material: Titanium	Set it upon the cutter. It will restrict the cutter penetration depth.
Ratchet Connector	The instrument for shaping a hole for an implant in the bone. Main material: Steel	For using cutters with a torque ratchet.
Screw implant Direction Pin	The instrument for measuring the inclination of the set implant. Main material: Titanium	Screw it into the implant for measuring.
Parallel Pin	The instrument for measuring the inclination of the set implant. Main material: Stainless steel	Set it into the bone cavity after using the initial drill.
Drill Extension	The adapter for lengthening the cutter. Main material: Steel	Insert the cutter used for shaping the implant site into the drill extension.
Torque ratchet	The instrument for setting and extracting the implant. Main material: Steel	Connect it to the dynamometer before use.
Contra angle connector	The adapter for the cortical tap used for forming the implant site. Main material: Steel.	Connect it to the physiodispenser handpiece, insert the cutter, and cut a hole in the bone.
Driver Holder & Depth Gauge	The instrument for handling the hex driver and measuring the depth of the cut hole. Main material: Stainless steel	Fix it inside the hex driver for handling the screws or the abutments. Set the depth gauge into the cavity, and measure the depth.

Hex Driver	The driver for fixing the abutment. Main material: Steel	Use the hex driver to fix the abutment to the implant.
Fixture Driver	The instrument for setting the implant, fixing the ball abutment and setting the implant with a ratchet wrench. Main material: Steel.	Set the implant into the bone with the fixture driver and fix the abutment on the implant.

Table 6.22.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
1.	Lindemann Drill	LDS23C	35,8	2,3	
2.	Surgical drill	TSD22C S	34,7	2,2	
3.	Surgical drill	TSD22C L	40,7	2,2	
4.	Surgical drill	TSD30C S	34,7	3,0	
5.	Surgical drill	TSD30C L	40,7	3,0	
6.	Surgical drill	TSD35C S	34,7	3,5	
7.	Surgical drill	TSD35C L	40,7	3,5	
8.	Surgical drill	TSD40C S	34,7	4,0	
9.	Surgical drill	TSD40C L	40,7	4,0	
10.	Surgical drill	TSD45C S	34,7	4,5	
11.	Surgical drill	TSD45C L	40,7	4,5	
12.	Cortical drill	ISCD35F	33,0	2,95	
13.	Cortical drill	ISCD40F	33,0	3,45	
14.	Cortical drill	ISCD45F	33,0	3,95	

15.	Cortical drill	ISCD50F	33,0	4,45		
16.	Cortical Tap	ISTD38S	13,9	3,8		
17.	Cortical Tap	ISTD43S	13,9	4,3		
18.	Cortical Tap	ISTD45S	13,9	4,5		
19.	Cortical Tap	ISTD50S	13,9	5,0		
20.	Drill Stopper	DS030C	16,00	D1 5,5	D2 5,4	
21.	Drill Stopper	DS040C	15,00	D1 5,5	D2 5,4	
22.	Drill Stopper	DS050C	14,00	D1 5,5	D2 5,4	
23.	Drill Stopper	DS060C	13,00	D1 5,5	D2 5,4	
24.	Drill Stopper	DS066C	12,4	D1 5,5	D2 5,4	
25.	Drill Stopper	DS070C	11,7	D1 5,5	D2 5,4	
26.	Drill Stopper	DS085C	10,5	D1 5,5	D2 5,4	
27.	Drill Stopper	DS100C	9,00	D1 5,5	D2 5,4	
28.	Drill Stopper	DS115C	7,50	D1 5,5	D2 5,4	
29.	Drill Stopper	DS130C	6,00	D1 5,5	D2 5,4	
30.	Ratchet connector	RC10	18,0	5,0		
31.	Ratchet connector	RC15	23,0	5,0		
32.	Screw implant Direction Pin	DPIS35C	15,5	3,5		

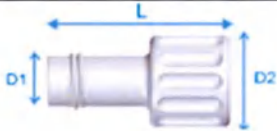
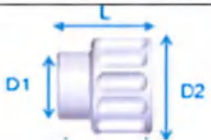
33.	Screw implant Direction Pin	DPIS45C	15,5	4,5		
34.	Parallel Pin	PP07F	15,8	4,3		
35.	Parallel Pin	PP08F	18,8	4,3		
36.	Parallel Pin	PP10F	21,8	4,3		
37.	Drill Extension	DE01	29,5	4,5		
38.	Torque ratchet	TW60	101,10	1,7		
39.	Contra angle connector	CAA00	18,0	5,0		
40.	Driver Holder & Depth Gauge	DHDG	152,23	D1 1,7	D2 7,6	
41.	Hex Driver	HD1210S	17,40	7,5		
42.	Hex Driver	HD1215S	22,40	7,5		
43.	Fixture Driver	ISFD05C	27,7	4,0		
44.	Fixture Driver	ISFD05C L	32,7	4,0		
45.	Fixture Driver	ISFD10R	22,7	7,5		
46.	Fixture Driver	ISFD15R	27,7	7,5		

6.23. Driver kit, item FDHSET01.

Table 6.23.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Driver	An instrument for fixing, pinpointing and extraction of an abutment as well as for fixing the healing abutment cover cap. Main material: Steel	Set it together with an abutment upon the implant fixture and fix the connection.

Table 6.23.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm		Appearance
				D1	D2	
1.	Driver	FD00	12,5	3,8	7,0	
2.	Driver	FH00	8,5	5,0	7,0	

6.24. Chip making kit, item NACM40ISETS.

Table 6.24.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Chip Maker	The instrument with a stopper for collecting drilled bone tissue. Main material: Steel	Insert the drill into the physiodispenser handpiece. Set it onto the bone in the surgery area. Collect bone tissue.
Stopper	It is used for drilling depth restriction, while collecting bone tissue. Main material: Polyetheretherketone (PEEK)	Set it onto the chip maker. Insert the chip maker into the physiodispenser handpiece. Set it onto the bone in the surgery area. Collect bone tissue.

Table 6.24.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
1.	Chip Maker	ACM40S	32,7	4,0	
2.	Stopper	ACMSI40S	17,7	6,5	

6.25. Chip making kit, item NACM45SETS.

Table 6.25.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Chip Maker	The instrument with a stopper for collecting drilled bone tissue. Main material: Steel	Insert the drill into the physiodispenser handpiece. Set it onto the bone in the surgery area. Collect bone tissue.
Stopper	It is used for drilling depth restriction, while collecting bone tissue. Main material : Polyetheretherketone (PEEK)	Set it onto the chip maker. Insert the chip maker into the physiodispenser handpiece. Set it onto the bone in the surgery area. Collect bone tissue.

Table 6.25.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
1.	Chip Maker	ACM45S	32,7	4,5	
2.	Stopper	ACMSI45S	17,7	7,0	

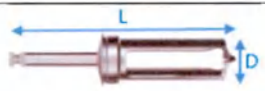
6.26. Chip making kit, item NACM50SETS.

Table 6.26.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Chip Maker	The instrument with a stopper for collecting drilled bone tissue. Main material: Steel	Insert the drill into the physiodispenser handpiece. Set it onto the bone in the surgery area. Collect bone tissue.
Stopper	It is used for drilling depth restriction, while collecting bone tissue. Main material : Polyetheretherketone (PEEK)	Set it onto the chip maker. Insert the chip maker into the physiodispenser handpiece. Set it onto the bone in the surgery area. Collect bone tissue.

Table 6.26.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
---	----------------------	----------	--------------------	-----------------------------	------------

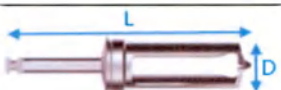
1.	Chip Maker	ACM50S	32,7	5,0	
2.	Stopper	ACMSI50S	17,7	7,5	

6.27: Chip making kit, item NACM60ISETS.

Table 6.27.1. Description, order of application.

Component of the kit	Description	Order of application
Chip Maker	The instrument with a stopper for collecting drilled bone tissue. Main material: Steel	Insert the drill into the physiodispenser handpiece. Set it onto the bone in the surgery area. Collect bone tissue.
Stopper	It is used for drilling depth restriction, while collecting bone tissue. Main material: Polyetheretherketone (PEEK)	Set it onto the chip maker. Insert the chip maker into the physiodispenser handpiece. Set it onto the bone in the surgery area. Collect bone tissue.

Table 6.27.2. General dimensions.

№	Component of the kit	Item No.	Total length L, mm	Working part diameter D, mm	Appearance
1.	Chip Maker	ACM60S	32,7	6,0	
2.	Stopper	ACMSI60S	17,7	8,5	

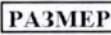
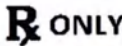
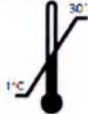
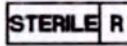
7. The list of standards to which the medical device complies.

Council Directive 93/42/EEC as amended 2007/47/EC; ISO 13485; ISO 9001; EN ISO 14971; EN 1639; EN 1041; ISO 15223-1; EN ISO 10993-5; EN ISO 10993-10; ISO 14644-1; EN ISO 17665-1; ISO 11138-1; ISO 11137-1; ISO 11137-2; ISO 11737-1; EN ISO 17664; ASTM F899-12b; ASTM F702; ASTM F67; ASTM A 276-13; ASTM F136-13; ASTM F2026; ASTM 493; ASTM B308; ASTM F1855; ASTM F2063-05.

Note: These standards are used in their latest revised versions: the organization will keep and update the list of reference standards as a record of its own management system in compliance with ISO 13485.

8. Meanings of symbols applied on the package labels

Table 8.1. Designations and symbols

Designations and symbols			
	Catalogue number		Non-sterile
	Size		Caution!
	Lot code		Do not use if the packaging is damaged
	Manufacture date		Rx only
	Use before		Temperature range
	Manufacturer		Prohibition of reuse
	Keep away from sunlight		Radiation sterilization
	Please, refer to the instructions for use		Repeated sterilization is forbidden

9. Maintenance and Repair

Maintenance and repair are not provided.

10. Device cleaning, disinfection and sterilization

10.1 Non-sterile devices

Neobiotech dental implantation instrument and appliance kits (excl. chip makers and stoppers) are intended for multiple use and supplied non-sterile. Therefore, prior to each application, they shall be thoroughly cleaned, disinfected and sterilized.

Cleaning and disinfection: After use, immediately wash and soak contaminated instruments using a disinfectant containing, at least, 70% alcohol.

Sterilization: After thorough cleaning of devices, sterilize them by steam at 132°C for minimum 4 minutes. Dry them for 30 minutes.

10.2. Sterile devices

Chip makers and stoppers are supplied sterile. Sterilization is carried out by gamma radiation with a minimum dose of 25 kGy to achieve the sterility assurance level. Gamma radiation sterilization

is an outsourced process controlled in compliance with the control procedure for outsourced processes.

11. Storage, transportation and operation conditions

Storage conditions: keep dry and avoid direct sunlight.

- temperature: 1 to +30°C
- relative humidity: no specific requirements
- atmospheric pressure: no specific requirements

Transportation conditions: Devices packed into shipping containers should be transported by all types of covered vehicles considering the precautions indicated on the shipping container and in accordance with the guidelines for goods transportation by the specific type of transport.

- temperature: 1 to +30°C
- relative humidity: no specific requirements
- atmospheric pressure: no specific requirements

Indoor use conditions for medical device:

- temperature: 5 to +35 °C
- relative humidity: no specific requirements
- atmospheric pressure: no specific requirements

12. Shelf life

The shelf life of the devices (excluding chip maker and stopper) is not limited.
The shelf life of chip makers and stoppers is 5 years from their sterilization / manufacture date.

13. Service life

The service life (life time) of the devices (excluding chip maker and stopper) is restricted by a number of repeated uses: 50 times.

The chip maker service life is restricted by a number of repeated uses: 7 times.

The stopper is designed for single use.

14. Disposal

Medical devices shall be disposed of in compliance with medical procedures adopted in medical institutions as well as local, state, or federal standards. The choice of methods for safe disposal and destruction of devices depends on the capacity and profile of the medical institution, the availability of waste decontamination / deactivation plants as well as the waste deactivation / destruction method adopted in the administrative territory (incineration, removal to landfills, disposal).

The devices contacting with humans belong to epidemiologically hazardous waste (devices contaminated with blood and/or other biological fluids of patients as well as the devices contacting with contagious patients). In this case, a medical institution only collects and stores the above-mentioned waste temporarily. The waste is collected into single-use bags, or containers with colored labeling adopted for hazardous medical waste in the premises, or on temporary storage sites for medical waste till its further transportation to the destruction or disposal site. The instruments contacting with patients shall be subjected to preliminary disinfection in duly established order prior to their disposal. Transportation of used medical

waste from medical institutions and their disposal shall be assigned to specialized organizations duly licensed for handling epidemiologically hazardous medical waste.

The devices, which do not contact with humans, as well as the consumer package, unused defective devices, and expired devices belong to epidemiologically safe waste (non-hazardous waste having no contact with biological fluids of patients, or contagious patients) that are similar in composition to solid domestic waste (SDW). However, they should be disposed of separately as industrial waste through specialized organizations licensed for this type of business activity.



등부 2024년 제 290호

Registered No. 2024-290

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 사용자설명서 _____ 에
기재된 주식회사 네오바이오텍
대표이사 허영구 _____

Ji Iseul _____

attorney-in-fact of
Neobiotech Co.,Ltd.
CEO / Heo Young Ku _____

의 대리인 지이슬 _____ 은
본 공증인의 면전에서 위 본인이 _____
기명날인한 것임을 확인하였다.

appeared before me and admitted
said principal`s subscription to
the attached INSTRUCTION FOR USE.

2024년 03월 08일
이 사무소에서 위 인증한다.



This is hereby attested on this
8th day of Mar. 2024 at this office.

공증사무소 명칭
공증 인가 **법무법인 디.엘.에스**

Name of the office
D. L. S PARTNERS

소 속 서울남부지방검찰청
소재지표시
서울특별시 구로구 디지털로31길 38-21
509호(구로동, 이앤씨3차)

Belong to **Seoul Southern**
District Prosecutor's Office
Address of the office
E & C Venture Dream Tower 3rd Rm#509, 38-21,
Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, Korea

박 상 호
공증인 공증담당변호사
박 상 호



Pak Sang-Ho
Signature of the Notary Public
Park, Sang-Ho

본 사무소는 인가번호 제15150호에 의거하여
2020년 02월 07일 법무부 장관으로부터
공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public Since
7, Feb. 2020 Under Law No.15150.

[Перевод с английского и корейского языков на русский язык]

[Печать: Нотариальная контора «ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС», нотариус Пак Сан-Хо]

И&Си Венчер Дрим Тауэр, 3 ком., № 509, 38–21,
Диджитал-ро, 31-гил, Куро-гу, Сеул, Корея

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
«ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС»**

(Тел.) 02-6330-8660
(Факс) 02-6330-8680

[Форма № 41]

Регистрационный номер: 2024 – 290

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

**«ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС»
(«D.L.S. PARTNERS»)**

И&Си Венчер Дрим Тауэр, 3 ком., № 509, 38–21,
Диджитал-ро, 31-гил, Куро-гу, Сеул, Корея
(E&C Venture Dream Tower 3rd Rm#509, 38–21,
Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, Korea)

[Печать: «ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС», НОТАРИУС]

210 мм х 297 мм
(Бланк с защитой) (1 категория) 70 г/м²

Дата: 27 июля 2022 г.
«Утверждено»

/подпись/ (подпись)
Хео Юнг Ку (Heo Young Ku)
Генеральный директор
«Необайотек Ко., Лтд.» (Neobiotech Co., Ltd.)

[Печать компании «Необайотек Ко., Лтд.»]

[Печать: Нотариальная контора «ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС», нотариус Пак Сан-Хо]

Инструкция по применению на медицинское изделие

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии в наборах

Версия 1

На каждой странице:

[Печать компании «Необайотек Ко., Лтд.»]

[Печать: Нотариальная контора «ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС», нотариус Пак Сан-Хо]

1. Наименование изделия

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии в наборах.

I. Вариант исполнения

I. Набор для бокового доступа к синусу, артикул SLAKIT, в составе:

1. С-риммер LC520 – 1 шт.
2. С-риммер LC620 – 1 шт.
3. С-риммер LC720 – 1 шт.
4. С-риммер LC535 – 1 шт.
5. С-риммер LC635 – 1 шт.
6. С-риммер LC735 – 1 шт.
7. C-Guide риммер SCG510 – 1 шт.
8. C-Guide риммер SCG610 – 1 шт.
9. C-Guide риммер SCG710 – 1 шт.
10. LS-риммер LS520 – 1 шт.
11. LS-риммер LS620 – 1 шт.
12. LS-риммер LS720 – 1 шт.
13. LS-риммер LS535 – 1 шт.
14. LS-риммер LS635 – 1 шт.
15. LS-риммер LS735 – 1 шт.
16. Элеватор для синуса SLE02 – 1 шт.
17. Элеватор для синуса SLE03 – 1 шт.
18. Элеватор для синуса SLE05 – 1 шт.
19. Бокс для инструментов – 1 шт.

II. Набор для синус-лифтинга, артикул SCAKIT, в составе:

1. Фреза пилотная SSD20 – 1 шт.
2. S-риммер ICR24 – 1 шт.
3. S-риммер ICR28 – 1 шт.
4. S-риммер ICR32 – 1 шт.
5. S-риммер ICR36 – 1 шт.
6. Ограничитель фрез SKS02 – 1 шт.
7. Ограничитель фрез SKS03 – 1 шт.
8. Ограничитель фрез SKS04 – 1 шт.
9. Ограничитель фрез SKS05 – 1 шт.
10. Ограничитель фрез SKS06 – 1 шт.
11. Ограничитель фрез SKS07 – 1 шт.
12. Ограничитель фрез SKS08 – 1 шт.
13. Ограничитель фрез SKS09 – 1 шт.
14. Ограничитель фрез SKS10 – 1 шт.
15. Ограничитель фрез SKS11 – 1 шт.
16. Костный спредер SBS20 – 1 шт.
17. Костный спредер SBS30 – 1 шт.
18. Уплотнитель костного материала SBC01 – 1 шт.
19. Спиралевидное сверло для продвижения костного материала SBI27 – 1 шт.
20. Инструмент для внесения костного материала JUMBO2 – 1 шт.
21. Глубиномер SDG00 – 1 шт.
22. Бокс для инструментов – 1 шт.

III. Набор для извлечения интегрированных имплантов, артикул FRKIT, в составе:

1. Устройство для извлечения имплантатов FR315 – 1 шт.
2. Устройство для извлечения имплантатов FR320 – 1 шт.
3. Устройство для извлечения имплантатов FR415 – 1 шт.
4. Устройство для извлечения имплантатов FR420 – 1 шт.
5. Устройство для извлечения имплантатов FR515 – 1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

6. Устройство для извлечения имплантатов FR520 – 1 шт.
7. Устройство для извлечения имплантатов FR615 – 1 шт.
8. Устройство для извлечения имплантатов FR620 – 1 шт.
9. Винт для устройства для извлечения имплантатов FRS172 – 2 шт.
10. Винт для устройства для извлечения имплантатов FRS14 – 2 шт.
11. Винт для устройства для извлечения имплантатов FRS16 – 2 шт.
12. Винт для устройства для извлечения имплантатов FRS18 – 2 шт.
13. Винт для устройства для извлечения имплантатов FRS20 – 2 шт.
14. Винт для устройства для извлечения имплантатов FRS25 – 2 шт.
15. Динамометрический ключ FRCHT – 1 шт.
16. Динамометр TW80400 – 1 шт.
17. Шестигранный ключ HDF1607 – 1 шт.
18. Шестигранный ключ HDF1612 – 1 шт.
19. Шестигранный ключ HDF1617 – 1 шт.
20. Бокс для инструментов – 1 шт.

IV. Набор для извлечения сломанных винтов из имплантатов, артикул SRKIT2, в составе:

1. Когтевидное сверло CD16 – 1 шт.
2. Когтевидное сверло CD18 – 1 шт.
3. Когтевидное сверло CD20 – 1 шт.
4. Когтевидное сверло CD25 – 1 шт.
5. Реверсивное сверло RCD10 – 1 шт.
6. Реверсивное сверло RCD12 – 1 шт.
7. Реверсивное сверло RCD14 – 1 шт.
8. Инструмент для извлечения винта SR10 – 1 шт.
9. Инструмент для извлечения винта SR12 – 1 шт.
10. Инструмент для извлечения винта SR14 – 1 шт.
11. Направляющая для сверла с обратным вращением PG1018 – 1 шт.
12. Направляющая для сверла с обратным вращением PG1220 – 1 шт.
13. Направляющая для сверла с обратным вращением PG1425 – 1 шт.
14. Коническая направляющая CG00 – 1 шт.
15. Внутренняя направляющая IHG24 – 1 шт.
16. Внутренняя направляющая IHG25 – 1 шт.
17. Внутренняя направляющая IOG31 – 1 шт.
18. Внешняя направляющая EHG24 – 1 шт.
19. Внешняя направляющая EHG27 – 1 шт.
20. Внешняя направляющая EHG34 – 1 шт.
21. Направляющая для инструментов PGHD25SS – 1 шт.
22. Держатель направляющих GH00 – 1 шт.
23. Переходник для динамометрического ключа SHD00 – 1 шт.
24. Бокс для инструментов – 1 шт.

V. Набор хирургический S-WIDE KIT для установки имплантатов S-Wide, артикул SWKIT, в составе:

1. S-wide хирургическая фреза TSD48 – 1 шт.
2. S-wide хирургическая фреза TSD50 – 1 шт.
3. S-wide хирургическая фреза TSD55 – 1 шт.
4. S-wide хирургическая фреза TSD60 – 1 шт.
5. S-wide хирургическая фреза TSD65 – 1 шт.
6. S-wide метчик-сверло TD55 – 1 шт.
7. S-wide метчик-сверло TD60 – 1 шт.
8. S-wide метчик-сверло TD70 – 1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

9. S-wide мультипрофильная фреза MP55 – 1 шт.
10. S-wide мультипрофильная фреза MP60 – 1 шт.
11. S-wide мультипрофильная фреза MP70 – 1 шт.
12. Трепан-фреза TB40 – 1 шт.
13. Трепан-фреза TB50 – 1 шт.
14. S-wide-стоппер сверла DSL060 – 1 шт.
15. S-wide-стоппер сверла DSL070 – 1 шт.
16. S-wide-стоппер сверла DSL085 – 1 шт.
17. S-wide-стоппер сверла DSL100 – 1 шт.
18. S-wide-стоппер сверла DSL115 – 1 шт.
19. Шестигранная отвертка HD1212S – 1 шт.
20. Коннектор для метчика RC15 – 1 шт.
21. Коннектор контругловой CAA00 – 1 шт.
22. Бокс для инструментов – 1 шт.

VI. Набор хирургический S-WIDE KIT для установки имплантатов S-Wide, артикул SWKIT2, в составе:

1. Фреза хирургическая TSDW50 – 1 шт.
2. Фреза хирургическая TSDW56 – 1 шт.
3. Трепан-фреза TB39 – 1 шт.
4. Маркер диаметра имплантата DM45 – 1 шт.
5. Стоппер сверла DSW050 – 1 шт.
6. Стоппер сверла DSW060 – 1 шт.
7. Стоппер сверла DSW066 – 1 шт.
8. Стоппер сверла DSW073 – 1 шт.
9. Стоппер сверла DSW085 – 1 шт.
10. Стоппер сверла DSW100 – 1 шт.
11. Стоппер сверла DSW115 – 1 шт.
12. Бокс для инструментов – 1 шт.

VII. Набор хирургический S-MINI KIT для установки имплантатов, артикул SMKIT, в составе:

1. Пин параллельности MPP10 – 2 шт.
2. S-Mini хирургическая фреза MSD15 – 1 шт.
3. S-Mini хирургическая фреза MSD20 – 1 шт.
4. S-Mini хирургическая фреза MSD25 – 1 шт.
5. S-Mini хирургическая фреза MSD30 – 1 шт.
6. Имплантовод ISQD20 – 1 шт.
7. Имплантовод BADH24 – 1 шт.
8. Коннектор для метчика RC15 – 1 шт.
9. Коннектор контругловой CAA00 – 1 шт.
10. S-Mini направляющая фреза MGD12 – 1 шт.
11. Бокс для инструментов – 1 шт.

VIII. Набор хирургический EZ-GBR KIT для НКР (направленной костной регенерации), артикул EZGBRKIT, в составе:

1. Сверло для фиксации EZ-винта EZSFD17 – 1 шт.
2. Стоппер сверла для фиксации EZ-винта EZSFDS050 – 1 шт.
3. Драйвер EZ-Break EZBRD – 1 шт.
4. Драйвер EZ-Cover Cap EZCCD42 – 1 шт.
5. Драйвер шестигранник двойной DHDC10 – 1 шт.
6. Драйвер шестигранник двойной DHDC20 – 1 шт.
7. Коннектор для метчика GRC15 – 1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

8. Рукоятка отвертки DRH – 1 шт.
9. Коннектор рукоятки EZ-Handle EZHC12 – 1 шт.
10. Отвертка крестообразная PHSD05 – 1 шт.
11. Отвертка крестообразная PHSD10 – 1 шт.
12. Отвертка крестообразная PHSD20 – 1 шт.
13. Драйвер для крестообразных EZ-винтов EZPHD3502 – 1 шт.
14. Драйвер для крестообразных EZ-винтов EZPHD3512 – 1 шт.
15. Драйвер для крестообразных EZ-винтов EZPHD3520 – 1 шт.
16. Толкатель EZ-Ti-Mem EZPD68 – 1 шт.
17. Бокс для инструментов – 1 шт.

IX. Набор хирургический для установки имплантатов, артикул ISFFKIT, в составе:

1. Фреза Линдемманна LDS23C – 1 шт.
2. Фреза хирургическая TSD22CS – 1 шт.
3. Фреза хирургическая TSD22CL – 1 шт.
4. Фреза хирургическая TSD30CS – 1 шт.
5. Фреза хирургическая TSD30CL – 1 шт.
6. Фреза хирургическая TSD35CS – 1 шт.
7. Фреза хирургическая TSD35CL – 1 шт.
8. Фреза хирургическая TSD40CS – 1 шт.
9. Фреза хирургическая TSD40CL – 1 шт.
10. Фреза хирургическая TSD45CS – 1 шт.
11. Фреза хирургическая TSD45CL – 1 шт.
12. Кортикальная фреза ISCD35F – 1 шт.
13. Кортикальная фреза ISCD40F – 1 шт.
14. Кортикальная фреза ISCD45F – 1 шт.
15. Кортикальная фреза ISCD50F – 1 шт.
16. Метчик кортикальный PTAP35FS – 1 шт.
17. Метчик кортикальный PTAP40FS – 1 шт.
18. Метчик кортикальный PTAP45FS – 1 шт.
19. Метчик кортикальный PTAP50FS – 1 шт.
20. Ограничитель фрез DS030C – 1 шт.
21. Ограничитель фрез DS040C – 1 шт.
22. Ограничитель фрез DS050C – 1 шт.
23. Ограничитель фрез DS060C – 1 шт.
24. Ограничитель фрез DS066C – 1 шт.
25. Ограничитель фрез DS070C – 1 шт.
26. Ограничитель фрез DS085C – 1 шт.
27. Ограничитель фрез DS100C – 1 шт.
28. Ограничитель фрез DS115C – 1 шт.
29. Ограничитель фрез DS130C – 1 шт.
30. Шестигранная отвертка HD1210S – 1 шт.
31. Шестигранная отвертка HD1215S – 1 шт.
32. Коннектор для метчика RC10 – 1 шт.
33. Коннектор для метчика RC15 – 1 шт.
34. Направляющий пин DPIS35C – 1 шт.
35. Направляющий пин DPIS45C – 2 шт.
36. Пин параллельности PP07F – 1 шт.
37. Пин параллельности PP08F – 1 шт.
38. Пин параллельности PP10F – 1 шт.
39. Удлинитель фрезы DE01 – 1 шт.
40. Динамометрический ключ TW60 – 1 шт.
41. Коннектор контругловой CAA00 – 1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

42. Глубиномер DG17 – 1 шт.
43. Держатель отвертки DH02 – 1 шт.
44. Имплантовод ISFD05C – 1 шт.
45. Имплантовод ISFD05CL – 1 шт.
46. Имплантовод ISFD10R – 1 шт.
47. Имплантовод ISFD15R – 1 шт.
48. Бокс для инструментов – 1 шт.

X. Набор вспомогательных хирургических инструментов для имплантации NEO SURGICAL ACCESSORY KIT, артикул ACCKIT, в составе:

1. Маркер диаметра имплантата DM35 – 1 шт.
2. Маркер диаметра имплантата DM40 – 1 шт.
3. Маркер диаметра имплантата DM45 – 1 шт.
4. Маркер диаметра имплантата DM50 – 1 шт.
5. Маркер диаметра имплантата DM55 – 1 шт.
6. Маркер диаметра имплантата DM60 – 1 шт.
7. Фреза планировщик кости BP35 – 1 шт.
8. Фреза планировщик кости BP40 – 1 шт.
9. Фреза планировщик кости BP50 – 1 шт.
10. Фреза планировщик кости BP65 – 1 шт.
11. Фреза планировщик кости BP80 – 1 шт.
12. Фреза профилировщик кости BPN40 – 1 шт.
13. Фреза профилировщик кости BPR50 – 1 шт.
14. Фреза профилировщик кости BPI60 – 1 шт.
15. Фреза профилировщик кости BPB60 – 1 шт.
16. Фреза профилировщик кости ISBP48 – 1 шт.
17. Фреза профилировщик кости ISBP55 – 1 шт.
18. Фреза профилировщик кости ISBP60 – 1 шт.
19. Шестигранная отвертка-ключ QTH1215 – 1 шт.
20. Шестигранная отвертка-ключ QTH12515 – 1 шт.
21. Мукотом TP35 – 1 шт.
22. Мукотом TP40 – 1 шт.
23. Мукотом TP45 – 1 шт.
24. Мукотом TP50 – 1 шт.
25. Коннектор для метчика RC15 – 1 шт.
26. Бокс для инструментов – 1 шт.

XI. Набор универсальный ортопедический для работы с различными имплантационными системами, артикул UVPRTKIT, в составе:

1. Шестигранная отвертка HD1210S – 1 шт.
2. Шестигранная отвертка HD1215S – 1 шт.
3. Шестигранная отвертка HD12510S – 1 шт.
4. Шестигранная отвертка HD12515S – 1 шт.
5. Отвертка SCSD10S – 1 шт.
6. Отвертка SCSD15S – 1 шт.
7. Отвертка UGD10S – 1 шт.
8. Отвертка UGD15S – 1 шт.
9. Держатель отвертки DH02 – 1 шт.
10. Динамометрический ключ TW60 – 1 шт.
11. Бокс для инструментов – 1 шт.

XII. Набор для протезирования, артикул PRTKIT, в составе:

1. Шестигранная отвертка HD1210S – 1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

2. Шестигранная отвертка HD1215S – 1 шт.
3. Шестигранная отвертка HD1220S – 1 шт.
4. Шестигранная отвертка HD1225S – 1 шт.
5. Шестигранная отвертка HD12510S – 1 шт.
6. Шестигранная отвертка HD12515S – 1 шт.
7. Шестигранная отвертка HD12520S – 1 шт.
8. Шестигранная отвертка HD12525S – 1 шт.
9. Шестигранная отвертка для углового наконечника HDC1210 – 1 шт.
10. Шестигранная отвертка для углового наконечника HDC1215 – 1 шт.
11. Шестигранная отвертка для углового наконечника HDC12510 – 1 шт.
12. Шестигранная отвертка для углового наконечника HDC12515 – 1 шт.
13. Ручная отвертка HDH1220S – 1 шт.
14. Ручная отвертка HDH12520S – 1 шт.
15. Шестигранная отвертка для динамометрического ключа HD1220RCS – 1 шт.
16. Шестигранная отвертка для динамометрического ключа HD12520RCS – 1 шт.
17. Угловая отвертка HDA1215S – 1 шт.
18. Угловая отвертка HDA1220S – 1 шт.
19. Угловая отвертка HDA12515S – 1 шт.
20. Угловая отвертка HDA12520S – 1 шт.
21. Позиционер абатмента AP202N – 1 шт.
22. Позиционер абатмента AP205N – 1 шт.
23. Позиционер абатмента AP207N – 1 шт.
24. Позиционер абатмента AP252N – 1 шт.
25. Позиционер абатмента AP255N – 1 шт.
26. Позиционер абатмента AP257N – 1 шт.
27. Динамометрический ключ TW60 – 1 шт.
28. Бокс для инструментов – 1 шт.

XIII. Набор для снятия оттисков Neo PickCap, артикул PCIKIT, в составе:

1. Позиционер абатмента AP165N – 1 шт.
2. Шестигранная отвертка HD1215S – 1 шт.
3. Шестигранная отвертка HD1220S – 1 шт.
4. Шестигранная отвертка HD1225S – 1 шт.
5. Трансфер оттисковый PickCap ISPCIB3503 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCap ISPCIS20 (3 шт.)
6. Трансфер оттисковый PickCap ISPCIB3510 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCap ISPCIS20 (3 шт.)
7. Трансфер оттисковый PickCap ISPCIB4008 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCap ISPCIS20 (3 шт.)
8. Трансфер оттисковый PickCap ISPCIB3505 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCap ISPCIS20 (3 шт.)
9. Трансфер оттисковый PickCap ISPCIB4003 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCap ISPCIS20 (3 шт.)
10. Трансфер оттисковый PickCap ISPCIB4010 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCap ISPCIS20 (3 шт.)
11. Трансфер оттисковый PickCap ISPCIB3508 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCap ISPCIS20 (3 шт.)
12. Трансфер оттисковый PickCap ISPCIB4005 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCap ISPCIS20 (3 шт.)
13. Трансфер оттисковый PickCap ISPCIB403 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCap ISPCIS20 (3 шт.)
14. Трансфер оттисковый PickCap ISPCIB405 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCap ISPCIS20 (3 шт.)

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

15. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB502 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
16. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB505 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
17. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB603 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
18. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB606 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
19. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB704 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
20. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB803 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
21. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB904 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
22. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB408 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
23. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB503 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
24. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB506 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
25. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB604 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
26. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB702 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
27. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB705 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
28. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB804 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
29. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB410 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
30. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB504 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
31. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB602 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
32. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB605 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
33. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB703 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
34. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB706 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
35. Трансфер оттисковый PickCar ISPCIB903 (3 шт.) с винтом для колпачка оттискового PickCar ISPCIS20 (3 шт.)
36. Колпачок оттисковый PickCar PCISC01 – 50 шт.
37. Колпачок оттисковый PickCar PCILC01 – 50 шт.
38. Пинцет PCIPC – 1 шт.
39. Бокс для инструментов – 1 шт.

XIV. Набор хирургический NEO NAVIGUIDE KIT для установки имплантатов со втулками для хирургических шаблонов, артикул NEONGKIT, в составе:

1. Фреза начальная NGTWD2207 – 1 шт.
2. Фреза начальная NGTWD2208 – 1 шт.
3. Фреза начальная NGTWD2210 – 1 шт.
4. Фреза начальная NGTWD2211 – 1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

5. Фреза начальная NGTWD2213 – 1 шт.
6. Фреза коническая NGTD3007 – 1 шт.
7. Фреза коническая NGTD3008 – 1 шт.
8. Фреза коническая NGTD3010 – 1 шт.
9. Фреза коническая NGTD3011 – 1 шт.
10. Фреза коническая NGTD3013 – 1 шт.
11. Фреза коническая NGTD3507 – 1 шт.
12. Фреза коническая NGTD3508 – 1 шт.
13. Фреза коническая NGTD3510 – 1 шт.
14. Фреза коническая NGTD3511 – 1 шт.
15. Фреза коническая NGTD3513 – 1 шт.
16. Фреза коническая NGTD4007 – 1 шт.
17. Фреза коническая NGTD4008 – 1 шт.
18. Фреза коническая NGTD4010 – 1 шт.
19. Фреза коническая NGTD4011 – 1 шт.
20. Фреза коническая NGTD4013 – 1 шт.
21. Фреза коническая NGTD4507 – 1 шт.
22. Фреза коническая NGTD4508 – 1 шт.
23. Фреза коническая NGTD4510 – 1 шт.
24. Фреза коническая NGTD4511 – 1 шт.
25. Фреза коническая NGTD4513 – 1 шт.
26. Фреза пилотная NGPD22 – 1 шт.
27. Кортикальная фреза NGCD40F – 1 шт.
28. Кортикальная фреза NGCD45F – 1 шт.
29. Кортикальная фреза NGCD50F – 1 шт.
30. Метчик кортикальный NGISCT40R – 1 шт.
31. Метчик кортикальный NGISCT45R – 1 шт.
32. Метчик кортикальный NGISCT50W – 1 шт.
33. Триммер для костей NGBT00 – 1 шт.
34. Триммер для костей NGBT15 – 1 шт.
35. Триммер для костей NGBT30 – 1 шт.
36. Фреза профилировщик кости ISBP55 – 1 шт.
37. Фреза профилировщик кости ISBP60 – 1 шт.
38. Шестигранная отвертка HD1215S – 1 шт.
39. Мукотом NGTP43R – 1 шт.
40. Удлинитель фрезы DE01 – 1 шт.
41. Динамометрический ключ TW60 – 1 шт.
42. Вертикальный фиксатор SGVABRW – 2 шт.
43. Вертикальный фиксатор SGISVAFRW – 2 шт.
44. Коннектор контругловой SGCAC00 – 1 шт.
45. Коннектор для метчика SGRC10 – 1 шт.
46. Доводчик импланта с ограничителем SGISFARW – 1 шт.
47. Доводчик имплантата без ограничителя SGISFARW30 – 2 шт.
48. Отвертка для доводчика импланта SGFART20 – 1 шт.
49. Имплантовод NGISFDR – 1 шт.
50. Имплантовод NGISFDCA – 1 шт.
51. Бокс для инструментов – 1 шт.

XV. Мини- навигационный набор для имплантатов систем IS-II active, IS-III active, артикул NEONGNKIT, в составе:

1. Фреза начальная NGTWD2208N – 1 шт.
2. Фреза начальная NGTWD2210N – 1 шт.
3. Фреза начальная NGTWD2211N – 1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

4. Фреза начальная NGTWD2213N – 1 шт.
5. Фреза начальная NGTWD2214N – 1 шт.
6. Финишная фреза NGTD3008N – 1 шт.
7. Финишная фреза NGTD3010N – 1 шт.
8. Финишная фреза NGTD3011N – 1 шт.
9. Финишная фреза NGTD3013N – 1 шт.
10. Финишная фреза NGTD3014N – 1 шт.
11. Фреза пилотная NGPD22N – 1 шт.
12. Метчик кортикальный NGISCT35N – 1 шт.
13. Метчик кортикальный NGISCT35NS – 1 шт.
14. Удлинитель фрезы DE01 – 1 шт.
15. Коннектор контругловой SGCAC00 – 1 шт.
16. Коннектор для метчика SGRC10 – 1 шт.
17. Фиксатор имплантата SGISFAN – 1 шт.
18. Фиксатор имплантата SGISFAN30 – 1 шт.
19. Имплантовод NGISFDRN – 1 шт.
20. Имплантовод NGISFDCAN – 1 шт.
21. Бокс для инструментов – 1 шт.

XVI. Набор ограничителей сверла Stop Drill KIT, артикул STOPDRILLKIT, в составе:

1. Стоппер-ограничитель сверла TSD2207F3 – 1 шт.
2. Стоппер-ограничитель сверла TSD2208F3 – 1 шт.
3. Стоппер-ограничитель сверла TSD2210F3 – 1 шт.
4. Стоппер-ограничитель сверла TSD2211F3 – 1 шт.
5. Стоппер-ограничитель сверла TSD2213F3 – 1 шт.
6. Стоппер-ограничитель сверла TSD3007F3 – 1 шт.
7. Стоппер-ограничитель сверла TSD3008F3 – 1 шт.
8. Стоппер-ограничитель сверла TSD3010F3 – 1 шт.
9. Стоппер-ограничитель сверла TSD3011F3 – 1 шт.
10. Стоппер-ограничитель сверла TSD3013F3 – 1 шт.
11. Стоппер-ограничитель сверла TSD3507F3 – 1 шт.
12. Стоппер-ограничитель сверла TSD3508F3 – 1 шт.
13. Стоппер-ограничитель сверла TSD3510F3 – 1 шт.
14. Стоппер-ограничитель сверла TSD3511F3 – 1 шт.
15. Стоппер-ограничитель сверла TSD3513F3 – 1 шт.
16. Стоппер-ограничитель сверла TSD4007F3 – 1 шт.
17. Стоппер-ограничитель сверла TSD4008F3 – 1 шт.
18. Стоппер-ограничитель сверла TSD4010F3 – 1 шт.
19. Стоппер-ограничитель сверла TSD4011F3 – 1 шт.
20. Стоппер-ограничитель сверла TSD4013F3 – 1 шт.
21. Стоппер-ограничитель сверла TSD4507F3 – 1 шт.
22. Стоппер-ограничитель сверла TSD4508F3 – 1 шт.
23. Стоппер-ограничитель сверла TSD4510F3 – 1 шт.
24. Стоппер-ограничитель сверла TSD4511F3 – 1 шт.
25. Стоппер-ограничитель сверла TSD4513F3 – 1 шт.
26. Фреза пилотная PD13 – 1 шт.
27. Шестигранная отвертка HD1215S – 1 шт.
28. Удлинитель фрезы DE01 – 1 шт.
29. Коннектор для метчика RC10 – 1 шт.
30. Динамометрический ключ TW60 – 1 шт.
31. Спейсер MDS4025 – 1 шт.
32. Спейсер MDS7030 – 1 шт.
33. Спейсер MDS8030 – 1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

34. Пин параллельности MDPP4050 – 1 шт.
35. Пин параллельности MDPP6070 – 1 шт.
36. Пин параллельности MDPP8090 – 1 шт.
37. Направляющий пин винтового импланта DP36 – 1 шт.
38. Направляющий пин винтового импланта DP45 – 2 шт.
39. Держатель шестигранной отвертки и глубиномер DHDG – 1 шт.
40. Бокс для инструментов – 1 шт.

XVII. Набор ортопедический Prosthetic Planning KIT, артикул PRTPNKIT, в составе:

1. Ортопедический шаблон, прямой PISAH415 – 1 шт.
2. Ортопедический шаблон, прямой PISAH515 – 1 шт.
3. Ортопедический шаблон, прямой PISAH615 – 1 шт.
4. Ортопедический шаблон, прямой PISAH715 – 1 шт.
5. Ортопедический шаблон, прямой PISAH425 – 1 шт.
6. Ортопедический шаблон, прямой PISAH525 – 1 шт.
7. Ортопедический шаблон, прямой PISAH625 – 1 шт.
8. Ортопедический шаблон, прямой PISAH725 – 1 шт.
9. Ортопедический шаблон, прямой PISAH435 – 1 шт.
10. Ортопедический шаблон, прямой PISAH535 – 1 шт.
11. Ортопедический шаблон, прямой PISAH635 – 1 шт.
12. Ортопедический шаблон, прямой PISAH735 – 1 шт.
13. Ортопедический шаблон, прямой PISAH445 – 1 шт.
14. Ортопедический шаблон, прямой PISAH545 – 1 шт.
15. Ортопедический шаблон, прямой PISAH645 – 1 шт.
16. Ортопедический шаблон, прямой PISAH745 – 1 шт.
17. Ортопедический шаблон, угловой PISAH1427 – 1 шт.
18. Ортопедический шаблон, угловой PISAH1527 – 1 шт.
19. Ортопедический шаблон, угловой PISAH1627 – 1 шт.
20. Ортопедический шаблон, угловой PISAH2427 – 1 шт.
21. Ортопедический шаблон, угловой PISAH2527 – 1 шт.
22. Ортопедический шаблон, угловой PISAH1447 – 1 шт.
23. Ортопедический шаблон, угловой PISAH1547 – 1 шт.
24. Ортопедический шаблон, угловой PISAH1647 – 1 шт.
25. Ортопедический шаблон, угловой PISAH2447 – 1 шт.
26. Ортопедический шаблон, угловой PISAH2547 – 1 шт.
27. Ортопедический шаблон, угловой PISAHB1427 – 1 шт.
28. Ортопедический шаблон, угловой PISAHB1527 – 1 шт.
29. Ортопедический шаблон, угловой PISAHB1627 – 1 шт.
30. Ортопедический шаблон, угловой PISAHB2427 – 1 шт.
31. Ортопедический шаблон, угловой PISAHB2527 – 1 шт.
32. Ортопедический шаблон, угловой PISAHB1447 – 1 шт.
33. Ортопедический шаблон, угловой PISAHB1547 – 1 шт.
34. Ортопедический шаблон, угловой PISAHB1647 – 1 шт.
35. Ортопедический шаблон, угловой PISAHB2447 – 1 шт.
36. Ортопедический шаблон, угловой PISAHB2547 – 1 шт.
37. Бокс для инструментов – 1 шт.

XVIII. Набор для синус-лифтинга, артикул SAKIT, в составе:

1. Фреза начальная SAD22 – 1 шт.
2. Фреза хирургическая SAD28 – 1 шт.
3. Фреза хирургическая SAD32 – 1 шт.
4. Фреза хирургическая SAD37 – 1 шт.
5. Фреза хирургическая SAD40 – 1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

6. S-риммер SASR28 – 1 шт.
7. S-риммер SASR32 – 1 шт.
8. S-риммер SASR36 – 1 шт.
9. S-риммер SASR39 – 1 шт.
10. C-риммер SAC640 – 1 шт.
11. C-Guide-риммер SACG610 – 1 шт.
12. LS-риммер SALS640 – 1 шт.
13. Боковой резак SCT30 – 1 шт.
14. Стоппер Crestal CDS010 – 1 шт.
15. Стоппер Crestal CDS020 – 1 шт.
16. Стоппер Crestal CDS030 – 1 шт.
17. Стоппер Crestal CDS040 – 1 шт.
18. Стоппер Crestal CDS050 – 1 шт.
19. Стоппер Crestal CDS060 – 1 шт.
20. Стоппер Crestal CDS070 – 1 шт.
21. Стоппер Crestal CDS080 – 1 шт.
22. Стоппер Crestal CDS090 – 1 шт.
23. Стоппер Crestal CDS100 – 1 шт.
24. Стоппер Crestal CDS110 – 1 шт.
25. Стоппер Crestal CDS120 – 1 шт.
26. Боковой стоппер LTS010 – 1 шт.
27. Боковой стоппер LTS020 – 1 шт.
28. Боковой стоппер LTS030 – 1 шт.
29. Боковой стоппер LTS040 – 1 шт.
30. Устройство для ввода жидкости AQT – 1 шт.
31. Аква-Система AQST – 1 шт.
32. Глубиномер SADG01 – 1 шт.
33. Инструмент для внесения костного материала JUMBO2 – 1 шт.
34. Уплотнитель костного материала SABCO1 – 1 шт.
35. Ручка дрели SADH01 – 1 шт.
36. Роторный элеватор SARE28 – 1 шт.
37. Роторный элеватор SARE32 – 1 шт.
38. Роторный элеватор SARE36 – 1 шт.
39. Роторный элеватор SARE39 – 1 шт.
40. Элеватор для синуса SLE01 – 1 шт.
41. Элеватор для синуса SLE02 – 1 шт.
42. Элеватор для синуса SLE03 – 1 шт.
43. Динамометрический ключ TW60 – 1 шт.
44. Шестигранная отвертка HD1215S – 1 шт.
45. Имплантовод ISFD05C – 1 шт.
46. Имплантовод ISFD10R – 1 шт.
47. Имплантовод ISFD15R – 1 шт.
48. Бокс для инструментов – 1 шт.

XIX. Набор для расщепления альвеолярного гребня Ridge Wider KIT, артикул RWKIT, в составе:

1. Фреза с винтовым креплением SFD15 – 1 шт.
2. Триммер для костей BTRI6010 – 1 шт.
3. Костный расширитель BEXP30 – 1 шт.
4. Костный расширитель BEXP35 – 1 шт.
5. Костный расширитель BEXP40 – 1 шт.
6. Костный расширитель BEXP45 – 1 шт.
7. Костный расширитель BEXP50 – 1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

8. Диск-нож SAWD0703N – 1 шт.
9. Диск-нож SAWD1003N – 1 шт.
10. Диск-нож SAWD1303N – 1 шт.
11. Диск-нож SAWD0710N – 1 шт.
12. Стопор сверла с винтовым креплением SFDS030 – 1 шт.
13. Стопор сверла с винтовым креплением SFDS050 – 1 шт.
14. Стопор сверла с винтовым креплением SFDS070 – 1 шт.
15. Коннектор для метчика RC15 – 1 шт.
16. Костное долото BCHI60 – 1 шт.
17. Бокс для инструментов – 1 шт.

XX. Набор Neo Master KIT, артикул NEOMKIT, в составе:

1. Фреза пилотная PD13 – 1 шт.
2. Фреза хирургическая TSD22CL – 1 шт.
3. Фреза хирургическая TSD30CL – 1 шт.
4. Фреза хирургическая TSD35CL – 1 шт.
5. Фреза хирургическая TSD40CL – 1 шт.
6. Фреза хирургическая TSD45CL – 1 шт.
7. Фреза хирургическая TSD22CS – 1 шт.
8. Фреза хирургическая TSD30CS – 1 шт.
9. Фреза хирургическая TSD35CS – 1 шт.
10. Фреза хирургическая TSD40CS – 1 шт.
11. Фреза хирургическая TSD45CS – 1 шт.
12. Ограничитель фрез DS030C – 1 шт.
13. Ограничитель фрез DS040C – 1 шт.
14. Ограничитель фрез DS050C – 1 шт.
15. Ограничитель фрез DS060C – 1 шт.
16. Ограничитель фрез DS066C – 1 шт.
17. Ограничитель фрез DS070C – 1 шт.
18. Ограничитель фрез DS085C – 1 шт.
19. Ограничитель фрез DS100C – 1 шт.
20. Ограничитель фрез DS115C – 1 шт.
21. Ограничитель фрез DS130C – 1 шт.
22. Спейсер MDS4025 – 1 шт.
23. Спейсер MDS7030 – 1 шт.
24. Спейсер MDS8030 – 1 шт.
25. Пин параллельности MDPP4050 – 1 шт.
26. Пин параллельности MDPP6070 – 1 шт.
27. Пин параллельности MDPP8090 – 1 шт.
28. Удлинитель фрезы DE01 – 1 шт.
29. Динамометрический ключ TW60 – 1 шт.
30. Коннектор для метчика RC10 – 1 шт.
31. Коннектор для метчика RC15 – 1 шт.
32. Направляющий пин винтового импланта DP36 – 1 шт.
33. Направляющий пин винтового импланта DP45 – 2 шт.
34. Шестигранная отвертка HD1210S – 1 шт.
35. Шестигранная отвертка HD1215S – 1 шт.
36. Держатель шестигранной отвертки и глубиномер DHDG – 1 шт.
37. Бокс для инструментов – 1 шт.

XXI. Набор Neo Core KIT, артикул NEOCKIT, в составе:

1. Фреза пилотная PD13 – 1 шт.
2. Фреза хирургическая TSD22CS – 1 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

3. Фреза хирургическая TSD30CS – 1 шт.
4. Фреза хирургическая TSD35CS – 1 шт.
5. Фреза хирургическая TSD40CS – 1 шт.
6. Фреза хирургическая TSD45CS – 1 шт.
7. Ограничитель фрез DS070C – 1 шт.
8. Ограничитель фрез DS085C – 1 шт.
9. Ограничитель фрез DS100C – 1 шт.
10. Ограничитель фрез DS115C – 1 шт.
11. Ограничитель фрез DS130C – 1 шт.
12. Пин параллельности PP08F – 1 шт.
13. Пин параллельности PP10F – 1 шт.
14. Динамометрический ключ TW60 – 1 шт.
15. Коннектор для метчика RC15 – 1 шт.
16. Удлинитель фрезы DE01 – 1 шт.
17. Шестигранная отвертка HD1215S – 1 шт.
18. Имплантовод ISFD05C – 1 шт.
19. Бокс для инструментов – 1 шт.

XXII. Набор хирургический Neo surgical kit для установки имплантатов, артикул NEOSKIT, в составе

1. Фреза Линдемманна LDS23C – 1 шт.
2. Фреза хирургическая TSD22CS – 1 шт.
3. Фреза хирургическая TSD22CL – 1 шт.
4. Фреза хирургическая TSD30CS – 1 шт.
5. Фреза хирургическая TSD30CL – 1 шт.
6. Фреза хирургическая TSD35CS – 1 шт.
7. Фреза хирургическая TSD35CL – 1 шт.
8. Фреза хирургическая TSD40CS – 1 шт.
9. Фреза хирургическая TSD40CL – 1 шт.
10. Фреза хирургическая TSD45CS – 1 шт.
11. Фреза хирургическая TSD45CL – 1 шт.
12. Кортикальная фреза ISCD35F – 1 шт.
13. Кортикальная фреза ISCD40F – 1 шт.
14. Кортикальная фреза ISCD45F – 1 шт.
15. Кортикальная фреза ISCD50F – 1 шт.
16. Метчик кортикальный ISTD38S – 1 шт.
17. Метчик кортикальный ISTD43S – 1 шт.
18. Метчик кортикальный ISTD45S – 1 шт.
19. Метчик кортикальный ISTD50S – 1 шт.
20. Ограничитель фрез DS030C – 1 шт.
21. Ограничитель фрез DS040C – 1 шт.
22. Ограничитель фрез DS050C – 1 шт.
23. Ограничитель фрез DS060C – 1 шт.
24. Ограничитель фрез DS066C – 1 шт.
25. Ограничитель фрез DS070C – 1 шт.
26. Ограничитель фрез DS085C – 1 шт.
27. Ограничитель фрез DS100C – 1 шт.
28. Ограничитель фрез DS115C – 1 шт.
29. Ограничитель фрез DS130C – 1 шт.
30. Коннектор для метчика RC10 – 1 шт.
31. Коннектор для метчика RC15 – 1 шт.
32. Направляющий пин DPIS35C – 1 шт.
33. Направляющий пин DPIS45C – 2 шт.

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

34. Пин параллельности PP07F – 1 шт.
35. Пин параллельности PP08F – 1 шт.
36. Пин параллельности PP10F – 1 шт.
37. Удлинитель фрезы DE01 – 1 шт.
38. Динамометрический ключ TW60 – 1 шт.
39. Коннектор для метчика CAA00 – 1 шт.
40. Держатель шестигранной отвертки и глубиномер DHDG – 1 шт.
41. Шестигранная отвертка HD1210S – 1 шт.
42. Шестигранная отвертка HD1215S – 1 шт.
43. Имплантовод ISFD05C – 1 шт.
44. Имплантовод ISFD05CL – 1 шт.
45. Имплантовод ISFD10R – 1 шт.
46. Имплантовод ISFD15R – 1 шт.
47. Бокс для инструментов – 1 шт.

XXIII. Набор отверток, артикул FDHSET01, в составе:

1. Отвертка, артикул FD00 – 1 шт.
2. Отвертка, артикул FH00 – 1 шт.

XXIV. Набор для изготовления чипов, артикул NACM40ISETS, в составе:

1. Чипмейкер, артикул ACM40S – 1 шт.
2. Ограничитель-стоппер, артикул ACMSI40S – 7 шт.

XXV. Набор для изготовления чипов, артикул NACM45ISETS, в составе:

1. Чипмейкер, артикул ACM45S – 1 шт.
2. Ограничитель-стоппер, артикул ACMSI45S – 7 шт.

XXVI. Набор для изготовления чипов, артикул NACM50ISETS, в составе:

1. Чипмейкер, артикул ACM50S – 1 шт.
2. Ограничитель-стоппер, артикул ACMSI50S – 7 шт.

XXVII. Набор для изготовления чипов, артикул NACM60ISETS, в составе:

1. Чипмейкер, артикул ACM60S – 1 шт.
2. Ограничитель-стоппер, артикул ACMSI60S – 7 шт.

II. Инструкция по применению (доступна в электронном виде)

Далее по тексту – инструменты, изделия, наборы.

2. Сведения о разработчике и производителе медицинского изделия, уполномоченном представителе производителя

Производитель:

«Необайотек Ко., Лтд.»

Юридический адрес: № 104, 24/№102, 103, 104-1, 104-2, 105, 106, 205, 212, 306, 312, 509, 510, 511, 608, 704, 708, 710 и 10 этаж, 36, Диджитал-ро 27гил, Куро-гу, Сеул, 08381, Республика Корея (#104, 24/#102, 103, 104-1, 104-2, 105, 106, 205, 212, 306, 312, 509, 510, 511, 608, 704, 708, 710 & 10F, 36, Digital-ro 27gil, Guro-gu, Seoul, 08381, Republic of Korea)

Тел.: +82 2 582 2885

E-mail: info@neobiotech.com

Разработчик:

Neobiotech Co., Ltd. (Необайотек Ко., Лтд.)

Юридический адрес: №104, 24/№102, 103, 104-1, 104-2, 105, 106, 205, 212, 306, 312, 509, 510, 511, 608, 704, 708, 710 и 10 этаж, 36, Диджитал-ро 27гил, Куро-гу, Сеул, 08381, Республика

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

Корея
Тел.: +82 2 582 2885
Эл. почта: info@neobiotech.com

Производственные площадки:

«Необайотек Ко., Лтд.»

1. № 104, 24/№ 102, 103, 104-1, 104-2, 105, 106, 205, 212, 306, 312, 509, 510, 511, 608, 704, 708, 710 и 10 этаж, 36, Диджитал-ро 27гил, Куро-гу, Сеул, 08381, Республика Корея
2. 1 этаж, 60, Газан диджитал 2-ро, Кымчхон-гу, Сеул, 08589, Республика Корея (1F, 60, Gasan digital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08589, Republic of Korea)

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВ ДЕНТАЛЬ»

Юридический адрес: 127015, город Москва, улица Вятская, дом 49, строение 2, Э 2 ПОМ I КОМ 60

Тел./факс: 8 (499) 652-77-10

Эл. почта: info@gl-dent.ru

Сайт: www.gl-dent.ru

3. Назначение медицинского изделия, потенциальные потребители, область применения

3.1 Назначение медицинского изделия

Изделия предназначены для хирургической установки фиксаторов имплантатов и протезов, для подготовки ложа имплантата, удаления кортикальной кости, а также для формирования резьбы на кости во избежание избыточного крутящего момента, создаваемого во время установки имплантата в твердую кость.

3.2 Потенциальные потребители

Врачи-стоматологи-хирурги, врачи-челюстно-лицевые хирурги и врачи-хирурги-имплантологи.

3.3 Область применения

Дентальная имплантология, челюстно-лицевая хирургия.

4. Показания, противопоказания, меры предосторожности, побочные эффекты

4.1 Показания

Используется в стоматологии в качестве вспомогательных изделий для реставраций при потере одного зуба, при частичной или полной потере зубов или уже существующем эдентулизме в верхней и нижней челюсти посредством изготовления соответствующего костного ложа для челюстной кости.

В кости любой плотности и в следующих клинических ситуациях:

- Отсутствие одного или нескольких зубов, а также полная адентия;
- Посттравматические и постоперационные дефекты челюстных костей;

При соответствующих костных характеристиках (плотность, ширина и высота кости):

- Единичные зубные протезы на промежутках от резцов до премоляров.
- Мостовидный протез на челюсти, как полностью, так и частично лишенной зубов.
- Жесткое крепление протезов посредством балок и систем шариковой фиксации.
- Крепление для ортодонтических систем регулировки.

4.2. Противопоказания

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

- 1) Общая неконтролируемая диспраксия
- 2) Прохождение радиотерапии и лучевой терапии для лечения злокачественной опухоли
- 3) Пациенты, имеющие проблемы с соотношением челюстей и окклюзией
- 4) Пациенты с инфекцией полости рта или воспалением (несоответствующая гигиена полости рта, бруксизм, ксеростомия)
- 5) Сахарный диабет, гипертония, болезни желез внутренней секреции, сердечно-сосудистые заболевания
- 6) Беременные, курящие пациенты, пациенты с психическими расстройствами, например, злоупотребляющие алкоголем, наркотиками, невротические пациенты
- 7) Нарушения коагуляции крови или серьезные заболевания сердца
- 8) Аллергия на металлы изделий
- 9) Другие пародонтальные или хирургические операции, противопоказанные пациенту

4.3 Меры предосторожности

- 1) Следует заранее внимательно изучить состояние пациентов, страдающих костными заболеваниями (остеопороз, остеомалиция) или нарушениями костного обмена веществ и соблюдать осторожность при работе с такими пациентами;
- 2) Все инструменты компании предназначены для использования только в сочетании с имплантируемой системой компании Neobiotech Co., Ltd., поэтому запрещается их использование вместе с изделиями, произведенными другими компаниями;
- 3) Хирургическое вмешательство по имплантации должно проводиться стоматологом, прошедшим обучение и имеющим опыт хирургических вмешательств. Использующий имплантаты специалист должен предварительно полностью ознакомиться с методами работы и мерами предосторожности, а также подобрать изделия, подходящие для плана терапии. Неправильный отбор пациентов или неправильное применение изделий может привести к неправильному функционированию имплантата или потере костной ткани в окружающей имплантат области после хирургического вмешательства.
- 4) Сразу после использования инструменты необходимо подвергать соответствующей процедуре дезинфекции и стерилизации согласно разделу 13 настоящего документа.
- 5) Хранить в специальной таре для хранения для защиты от внешних ударов или повреждений.
- 6) Чипмейкер предназначен только для совместного использования с Ограничителем-стоппером, максимальное количество применений – 7 раз. Ограничитель-стоппер предназначен для одноразового использования. Повторное использование запрещено.
- 7) Изделия рекомендуется применять совместно с имплантатами и компонентами Neobiotech для детальной имплантологии и компонентами для протезирования для имплантатов дентальных Neobiotech, зарегистрированными в установленном порядке в Российской Федерации.
- 8) Изделия, имеющие хвостовики типа 1, совместимы со стоматологическими наконечниками соответствующего типа.

4.4 Побочные эффекты

Могут возникнуть такие осложнения, как неправильный прикус, парестезия, вызванная повреждением нервов, инфекция, отек, подкожное кровотечение, расхождение швов после имплантации, боль и язвы мягких тканей.

5. Описание изделия, конструкция, порядок применения

Данные изделия применяются при хирургических вмешательствах, связанных с использованием стоматологических имплантатов. Все инструменты обладают различными характеристиками, такими как длина, диаметр и выполняемые функции. Инструменты можно подбирать в зависимости от предпочтений пользователя и состояния пациента, а также особенностей терапии.

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

Часть изделий имеет цветную металлическую поверхность, получаемую в результате специальной обработки металла или нанесения специального покрытия, за счёт которых увеличивается износостойкость инструментов и улучшаются их антикоррозионные свойства. AlTiN покрытие (нитрид титана алюминия) – нанесение покрытия в токе инертного газа (чёрный цвет металла) и анодирование – создание оксидной плёнки на поверхности металлов путём их анодной поляризации в проводящей среде (жёлтый, розовый, синий, голубой, зелёный цвет металла).

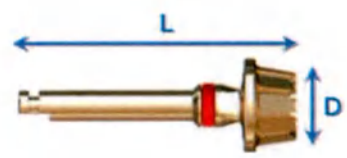
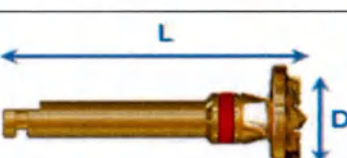
6. Описание, порядок применения

6.1. Набор для бокового доступа к синусу, артикул SLAKIT

Таблица 6.1.1. Описание, порядок применения

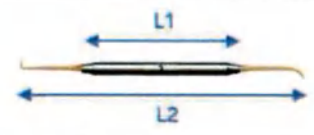
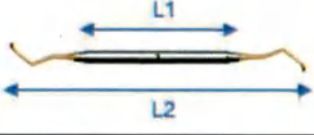
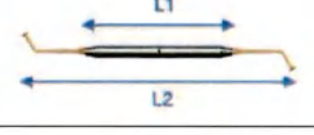
Компонент набора	Описание	Порядок применения
С-риммер	Фреза для формирования костного блока Основной материал: Сталь	Установить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Расположить в области верхнечелюстной пазухи и выпилить костный блок с формированием доступа в пазуху
С-Guide риммер	Фреза для кернения кости Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
LS-риммер	Фреза для сошлифовывания кости без повреждения мембраны пазухи Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Элеватор для синуса	Кюрета для отслаивания слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи Основной материал: Сталь	Отслоить слизистую пазухи с помощью кюреты через сформированное костное отверстие

Таблица 6.1.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Внешний вид
1.	С-риммер	LC520	22,5	5,5	
2.	С-риммер	LC620	22,5	6,5	
3.	С-риммер	LC720	22,5	7,5	
4.	С-риммер	LC535	24,0	5,5	
5.	С-риммер	LC635	24,0	6,5	
6.	С-риммер	LC735	24,0	7,5	
7.	С-Guide риммер	SCG510	22,0	5,5	
8.	С-Guide риммер	SCG610	22,0	6,5	
9.	С-Guide риммер	SCG710	22,0	7,5	
10.	LS-риммер	LS520	21,0	5,5	
11.	LS-риммер	LS620	21,0	6,5	
12.	LS-риммер	LS720	21,2	7,5	
13.	LS-риммер	LS535	23,1	5,5	
14.	LS-риммер	LS635	23,1	6,5	
15.	LS-риммер	LS735	23,3	7,5	

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

16.	Элеватор синуса	для	SLE02	L1 106,0 L2 181,0	-	
17.	Элеватор синуса	для	SLE03	L1 106,0 L2 184,0	-	
18.	Элеватор синуса	для	SLE05	L1 106,0 L2 199,0	-	

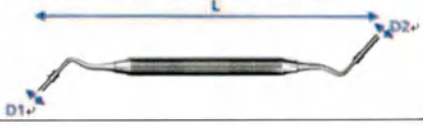
6.2. Набор для синус-лифтинга, артикул SCAKIT

Таблица 6.2.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Фреза пилотная	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
S-риммер	Фреза для формирования доступа к верхнечелюстной пазухе Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Ограничитель фрез	Стоппер-ограничитель для фрезы Основной материал: Титан	Установить на фрезу. Ограничивает глубину проникновения фрезы
Костный спредер	Инструмент, предназначенный для продвижения внесенного костного материала в лунку. Основной материал: Нержавеющая сталь	Установить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Продвинуть в костное отверстие костную стружку и распределить в боковых отделах
Уплотнитель костного материала	Инструмент для уплотнения внесенной костной стружки Основной материал: Нержавеющая сталь	С помощью инструмента произвести паковку и уплотнение костной стружки
Спиралевидное сверло для продвижения костного материала	Инструмент для продвижения внесенного костного материала в лунку Основной материал: Титан	Установить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Продвинуть костную стружку в глубину костной полости
Инструмент для внесения костного материала	Инструмент для внесения костной стружки в сформированное отверстие Основной материал: Нержавеющая сталь	Заполнить костным материалом и внести в костную полость
Глубиномер	Инструмент для определения глубины сформированного отверстия. На инструменте присутствует мерная шкала с шагом 1 мм Основной материал: Титан	Установить в полость, измерить глубину

Таблица 6.2.2. Основные размеры

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм		Внешний вид
1.	Фреза пилотная	SSD20	32,2	2,0		
2.	S-риммер	ICR24	32,0	2,4		
3.	S-риммер	ICR28	32,0	2,8		
4.	S-риммер	ICR32	32,0	3,2		
5.	S-риммер	ICR36	32,0	3,6		
6.	Ограничитель фрез	SKS02	15,0	D1 4,4	D2 4.8	
7.	Ограничитель фрез	SKS03	14,0	D1 4,4	D2 4.8	
8.	Ограничитель фрез	SKS04	13,0	D1 4,4	D2 4.8	
9.	Ограничитель фрез	SKS05	12,0	D1 4,4	D2 4.8	
10.	Ограничитель фрез	SKS06	11,0	D1 4,4	D2 4.8	
11.	Ограничитель фрез	SKS07	10,0	D1 4,4	D2 4.8	
12.	Ограничитель фрез	SKS08	9,0	D1 4,4	D2 4.8	
13.	Ограничитель фрез	SKS09	8,0	D1 4,4	D2 4.8	
14.	Ограничитель фрез	SKS10	7,0	D1 4,4	D2 4.8	
15.	Ограничитель фрез	SKS11	6,0	D1 4,4	D2 4.8	
16.	Костный спредер	SBS20	32,0	2,7		
17.	Костный спредер	SBS30	32,0	3,1		
18.	Уплотнитель костного материала	SBC01	170,0	-		
19.	Спиралевидное сверло для продвижения костного материала	SBI27	32,0	2,7		
20.	Инструмент для внесения костного материала	JUMBO2	165,0	3,85		
21.	Глубиномер	SDG00	109,5	2,8		

6.3. Набор для извлечения интегрированных имплантов, артикул FRKIT

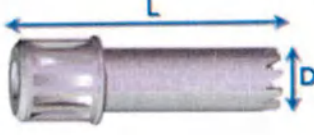
Таблица 6.3.1. Описание, порядок применения

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

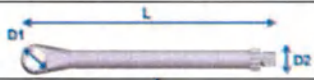
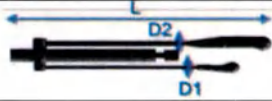
Компонент набора	Описание	Порядок применения
Устройство для извлечения имплантатов	Инструмент для извлечения имплантата из кости Основной материал: Сталь	Присоединить инструмент к имплантату, выкрутить имплантат против часовой стрелки, извлечь его из кости
Винт для устройства для извлечения имплантатов	Инструмент для извлечения имплантата из кости Основной материал: Сталь	Присоединить инструмент к имплантату, выкрутить имплантат против часовой стрелки, извлечь его из кости
Динамометрический ключ	Инструмент для установки и извлечения имплантата Основной материал: Нержавеющая сталь	Соединить с динамометром перед применением
Динамометр	Инструмент для установки имплантата и измерения усилия извлечения имплантата. На инструменте присутствует мерная шкала с шагом 10 и 100 Н x см для измерения торка Основной материал: Нержавеющая сталь	Присоединить к отвертке или имплантоводу, опосредованно применить к имплантату для его закручивания или выкручивания
Шестигранный ключ	Фиксатор для извлечения имплантата Основной материал: Сталь	Присоединить к инструменту для извлечения имплантата, использовать для извлечения имплантата из кости с помощью динамометрического ключа

Таблица 6.3.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Внешний вид
1.	Устройство для извлечения имплантатов	FR315	22,0	3,7	
2.	Устройство для извлечения имплантатов	FR320	27,0	3,7	
3.	Устройство для извлечения имплантатов	FR415	22,0	4,6	
4.	Устройство для извлечения имплантатов	FR420	27,0	4,6	
5.	Устройство для извлечения имплантатов	FR515	22,0	5,3	
6.	Устройство для извлечения имплантатов	FR520	27,0	5,3	
7.	Устройство для извлечения имплантатов	FR615	22,0	6,2	
8.	Устройство для извлечения имплантатов	FR620	27,0	6,2	
9.	Винт для устройства для извлечения имплантатов	FRS172	15,5	1,85	
10.	Винт для устройства для извлечения имплантатов	FRS14	15,5	1,4	
11.	Винт для устройства для извлечения имплантатов	FRS16	15,5	1,6	

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

12.	Винт для устройства для извлечения имплантатов	FRS18	15,5	1,8		
13.	Винт для устройства для извлечения имплантатов	FRS20	15,5	2,0		
14.	Винт для устройства для извлечения имплантатов	FRS25	14,7	2,5		
15.	Динамометрический ключ	FRCHT	89,5	D1 9,9	D2 6,0	
16.	Динамометр	TW80400	110,84	D1 2,8	D2 1,8	
17.	Шестигранный ключ	HDF1607	15,5	D1 7,5	D2 3,0	
18.	Шестигранный ключ	HDF1612	19,0	D1 7,5	D2 3,0	
19.	Шестигранный ключ	HDF1617	25,5	D1 7,5	D2 2,55	

6.4. Набор для извлечения сломанных винтов из имплантатов, артикул SRKIT2

Таблица 6.4.1. Описание, порядок применения

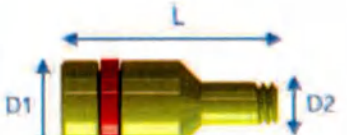
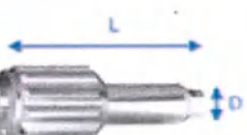
Компонент набора	Описание	Порядок применения
Когтевидное сверло	Сверло для выкручивания сломанного винта Основной материал: Нержавеющая сталь	Установить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Зафиксировать в области сломанного винта внутри имплантата, извлечь винт
Реверсивное сверло	Сверло для выкручивания сломанного винта Основной материал: Нержавеющая сталь	Установить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Зафиксировать в области сломанного винта внутри имплантата, извлечь винт.
Инструмент для извлечения винта	Инструмент для выкручивания сломанного винта Основной материал: Нержавеющая сталь	Ввести в имплантат, извлечь из него сломанный винт
Направляющая для сверла с обратным вращением	Инструмент, направляющий реверсивное сверло при извлечении винта Основной материал: Сталь	Установить внутри имплантата перед применением фрезы
Коническая направляющая	Инструмент, направляющий реверсивное сверло при извлечении винта Основной материал: Сталь	Установить внутри имплантата перед применением фрезы
Внутренняя направляющая	Инструмент, направляющий реверсивное сверло при извлечении винта Основной материал: Сталь	Установить внутри имплантата перед применением фрезы
Внешняя направляющая	Инструмент, направляющий реверсивное сверло при извлечении винта Основной материал: Сталь	Установить внутри имплантата перед применением фрезы
Направляющая для инструментов	Фиксатор для направляющей реверсивного сверла Основной материал: Сталь	Установить внутри имплантата перед применением фрезы

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

Держатель направляющих	Инструмент для фиксации направляющих для сверл Основной материал: Сталь	Установить в имплантат перед применением фрезы для извлечения сломанного винта
Переходник для динамометрического ключа	Инструмент для фиксации, определения положения и извлечения абатмента, а также для фиксации заглушки формирователя абатмента Основной материал: Сталь	Установить вместе с абатментом на имплантат и зафиксировать

Таблица 6.4.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм		Внешний вид
1.	Когтевидное сверло	CD16	33,0	1,05		
2.	Когтевидное сверло	CD18	33,0	1,25		
3.	Когтевидное сверло	CD20	33,0	1,4		
4.	Когтевидное сверло	CD25	33,0	1,85		
5.	Реверсивное сверло	RCD10	31,5	1,0		
6.	Реверсивное сверло	RCD12	31,5	1,2		
7.	Реверсивное сверло	RCD14	31,5	1,4		
8.	Инструмент для извлечения винта	SR10	29,0	1,02		
9.	Инструмент для извлечения винта	SR12	29,0	1,22		
10.	Инструмент для извлечения винта	SR14	29,0	1,42		
11.	Направляющая для сверла с обратным вращением	PG1018	10,0	D1 4,0	D2 1,0	
12.	Направляющая для сверла с обратным вращением	PG1220	10,0	D1 4,0	D2 1,2	
13.	Направляющая для сверла с обратным вращением	PG1425	10,0	D1 4,0	D2 1,4	
14.	Коническая направляющая	CG00	12,0	3,5		
15.	Внутренняя направляющая	IHG24	12,0	4,3		
16.	Внутренняя направляющая	IHG25	12,0	4,3		
17.	Внутренняя направляющая	IOG31	12,0	4,3		
18.	Внешняя направляющая	EHG24	10,5	4,3		
19.	Внешняя направляющая	EHG27	10,5	4,3		
20.	Внешняя направляющая	EHG34	10,5	4,3		
21.	Направляющая инструментов	PGHD25 SS	21,4	2,84		

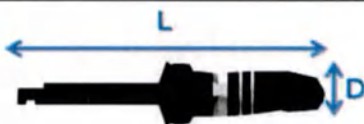
22.	Держатель направляющих	GH00	157,0	4,0		
23.	Переходник для динамометрического ключа	SHD00	14,0	D1 6,95	D2 3,6	

6.5. Набор хирургический S-WIDE KIT для установки имплантатов S-Wide, артикул SWKIT

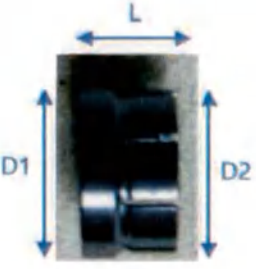
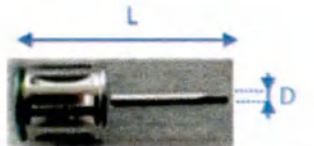
Таблица 6.5.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
S-wide хирургическая фреза	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
S-wide метчик-сверло	Фреза для формирования резьбы в кости при установке имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать резьбу в отверстии в кости
S-wide мультипрофильная фреза	Фреза для работы с костью при установке имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Трепан-фреза	Фреза для извлечения кости при установке имплантата Основной материал: Сталь	Установить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить в области кости, выпилить костный блок с формированием отверстия в кости
S-wide-стоппер сверла	Стоппер-ограничитель для фрезы Основной материал: Титан	Установить на фрезу. Ограничивает глубину проникновения фрезы
Шестигранная отвертка	Отвертка для фиксации абатмента Основной материал: Сталь	С помощью отвертки шестигранной зафиксировать абатмент к имплантату
Коннектор для метчика	Инструмент для формирования отверстия в кости под имплантат Основной материал: Сталь	Для использования фрез с динамометрическим ключом
Коннектор контругловой	Переходник для кортикального метчика, используемого для формирования ложа имплантата. Основной материал: Сталь	Присоединить к наконечнику физиодиспенсера, вставить фрезу, сформировать отверстие в кости.

Таблица 6.5.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Внешний вид
1.	S-wide хирургическая фреза	TSD48	31,5	4,8	
2.	S-wide хирургическая фреза	TSD50	31,5	5,0	

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

3.	S-wide хирургическая фреза	TSD55	31,5	5,5	
4.	S-wide хирургическая фреза	TSD60	31,5	6,0	
5.	S-wide хирургическая фреза	TSD65	31,5	6,5	
6.	S-wide метчик-сверло	TD55	16,1	5,5	
7.	S-wide метчик-сверло	TD60	16,1	6,0	
8.	S-wide метчик-сверло	TD70	16,1	7,0	
9.	S-wide мультипрофильная фреза	MP55	28,0	5,75	
10.	S-wide мультипрофильная фреза	MP60	28,0	6,4	
11.	S-wide мультипрофильная фреза	MP70	28,0	7,4	
12.	Трепан-фреза	TB40	31,0	5,0	
13.	Трепан-фреза	TB50	31,0	6,0	
14.	S-wide-стоппер сверла	DSL060	9,50	D1 7,6 D2 7,2	
15.	S-wide-стоппер сверла	DSL070	8,20	D1 7,6 D2 7,2	
16.	S-wide-стоппер сверла	DSL085	7,00	D1 7,6 D2 7,2	
17.	S-wide-стоппер сверла	DSL100	5,50	D1 7,6 D2 7,2	
18.	S-wide-стоппер сверла	DSL115	4,00	D1 7,6 D2 7,2	
19.	Шестигранная отвертка	HD1212S	19,40	1,19	
20.	Коннектор для метчика	RC15	23,0	5,0	
21.	Коннектор контругловой	CAA00	18,0	5,0	

6.6. Набор хирургический S-WIDE KIT для установки имплантатов S-Wide, артикул SWKIT2

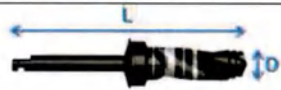
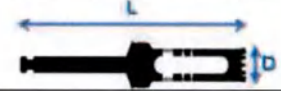
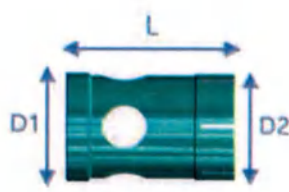
Таблица 6.6.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Фреза хирургическая	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

Трепан-фреза	Фреза для извлечения кости при установке имплантата Основной материал: Сталь	Установить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить в области кости, выпилить костный блок с формированием отверстия в кости
Маркер диаметра имплантата	Фреза для подбора диаметра имплантата Основной материал: Сталь	Подобрать согласно размеру устанавливаемых имплантатов
Стоппер сверла	Стоппер-ограничитель для фрезы Основной материал: Титан	Установить на фрезу. Ограничивает глубину проникновения фрезы

Таблица 6.6.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм		Внешний вид
1.	Фреза хирургическая	TSDW50	34,7	5,0		
2.	Фреза хирургическая	TSDW56	34,7	5,6		
3.	Трепан-фреза	TB39	32,0	4,65		
4.	Маркер диаметра имплантата	DM45	27,4	4,5		
5.	Стоппер сверла	DSW050	11,50	D1 7,8	D2 7,4	
6.	Стоппер сверла	DSW060	10,50	D1 7,8	D2 7,4	
7.	Стоппер сверла	DSW066	9,90	D1 7,8	D2 7,4	
8.	Стоппер сверла	DSW073	9,20	D1 7,8	D2 7,4	
9.	Стоппер сверла	DSW085	8,00	D1 7,8	D2 7,4	
10.	Стоппер сверла	DSW100	6,50	D1 7,8	D2 7,4	
11.	Стоппер сверла	DSW115	5,0	D1 7,8	D2 7,4	

6.7. Набор хирургический S-MINI KIT для установки имплантатов, артикул SMKIT

Таблица 6.7.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Пин параллельности	Инструмент для определения наклона установленного имплантата Основной материал: Нержавеющая сталь	Установить в костную полость после применения начальной фрезы

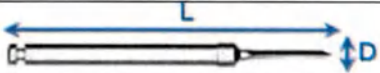
S-Mini хирургическая фреза	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Имплантовод	Инструмент для установки имплантата, фиксации шаровидного абатмента и для установки имплантата храповым ключом Основной материал: Сталь	С помощью имплантовода ввести имплантат в кость, зафиксировать абатмент на имплантате
Коннектор для метчика	Инструмент для формирования отверстия в кости под имплантат Основной материал: Сталь	Для использования фрез с динамометрическим ключом
Коннектор контругловой	Переходник для кортикального метчика, используемого для формирования ложа имплантата. Основной материал: Сталь	Присоединить к наконечнику физиодиспенсера, вставить фрезу, сформировать отверстие в кости.
S-Mini направляющая фреза	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости

Таблица 6.7.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Внешний вид
1.	Пин параллельности	MPP10	21,8	1,1	
2.	S-Mini хирургическая фреза	MSD15	37,0	1,5	
3.	S-Mini хирургическая фреза	MSD20	37,0	2,0	
4.	S-Mini хирургическая фреза	MSD25	37,0	2,5	
5.	S-Mini хирургическая фреза	MSD30	37,0	3,0	
6.	Имплантовод	ISQD20	29,5	4,2	
7.	Имплантовод	BADH24	26,0	4,0	
8.	Коннектор для метчика	RC15	23,0	5,0	
9.	Коннектор контругловой	CAA00	18,0	5,0	

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

10.	S-Mini направляющая фреза	MGD12	35,0	1,2	
-----	---------------------------	-------	------	-----	--

6.8. Набор хирургический EZ-GBR KIT для НКР (направленной костной регенерации), артикул EZGBRKIT

Таблица 6.8.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Сверло для фиксации EZ-винта	Используется для выполнения отверстия перед установкой фиксирующего винта EZ Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Стоппер сверла для фиксации EZ-винта	Стоппер-ограничитель для фрезы Основной материал: Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК)	Установить на фрезу. Ограничивает глубину проникновения фрезы
Драйвер EZ-Break	Отвертка для винтов Основной материал: Сталь	Присоединить к головке винта, зафиксировать винт в кости
Драйвер EZ-Cover Cap	Инструмент для установки защитного колпачка на фиксирующий винт Основной материал: Нержавеющая сталь	Установить с защитным колпачком на винт
Драйвер шестигранник двойной	Отвертка для фиксации спейсера Основной материал: Сталь	Установить спейсер на имплантат и зафиксировать
Коннектор для метчика	Инструмент для формирования отверстия в кости под имплантат Основной материал: Сталь	Для использования фрез с динамометрическим ключом
Рукоятка отвертки	Инструмент для удержания отвертки Основной материал: Алюминий	Вставить отвертку в рукоятку, использовать вручную без физиодиспенсера
Коннектор рукоятки EZ-Handle	Инструмент для соединения с рукояткой наконечника Основной материал: Сталь	Установить на наконечник перед использованием фиксирующего винта
Отвертка крестообразная	Отвертка для винтов Основной материал: Сталь	Зафиксировать отвертку в шляпке винта, закрутить винт
Драйвер для крестообразных EZ-винтов	Адаптер для установки винтов Основной материал: Сталь	Установить в наконечник физиодиспенсера, зафиксировать на головке винта, закрутить винт с помощью драйвера
Толкатель EZ-Ti-Mem	Инструмент для создания формы титановой мембраны Основной материал: Сталь	Применить к титановой мембране, для придания ей формы

Таблица 6.8.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Внешний вид
1.	Сверло для фиксации EZ-винта	EZSFD17	35,00	1,7	

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

2.	Стоппер сверла для фиксации EZ-винта	EZSFDS050	7,55	D1 4,5	D2 4,05	
3.	Драйвер EZ-Break	EZBRD	25,40	3,2		
4.	Драйвер EZ-Cover Cap	EZCCD42	56,80			
5.	Драйвер шестигранник двойной	DHDC10	27,90	0,95		
6.	Драйвер шестигранник двойной	DHDC20	37,90	0,95		
7.	Коннектор метчика для	GRC15	22,0	D1 7,5	D2 5,0	
8.	Рукоятка отвертки	DRH	110,0	15,0		
9.	Коннектор рукоятки EZ-Handle	EZHC12	22,4	5,0		
10.	Отвертка крестообразная	PHSD05	20,00	2,00		
11.	Отвертка крестообразная	PHSD10	29,65	2,0		
12.	Отвертка крестообразная	PHSD20	39,65	2,0		
13.	Драйвер для крестообразных винтов EZ-	EZPHD3502	22,00	3,8		
14.	Драйвер для крестообразных винтов EZ-	EZPHD3512	32,00	3,5		
15.	Драйвер для крестообразных винтов EZ-	EZPHD3520	40,00	3,5		
16.	Толкатель EZ-Ti-Mem	EZPD68	56,8	—		

6.9. Набор хирургический для установки имплантатов, артикул ISFFKIT

Таблица 6.9.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Фреза Линдемманна	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

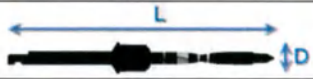
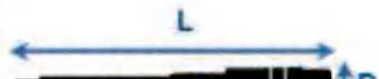
Фреза хирургическая	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Кортикальная фреза	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Метчик кортикальный	Фреза для формирования резьбы в кости при установке имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать резьбу в отверстии в кости
Ограничитель фрез	Стоппер-ограничитель для фрезы Основной материал: Титан	Установить на фрезу. Ограничивает глубину проникновения фрезы
Шестигранная отвертка	Отвертка для фиксации абатмента Основной материал: Сталь	С помощью отвертки шестигранной зафиксировать абатмент к имплантату
Коннектор для метчика	Инструмент для формирования отверстия в кости под имплантат Основной материал: Сталь	Для использования фрез с динамометрическим ключом
Направляющий пин	Инструмент для определения наклона установленного имплантата Основной материал: Титан	Вкрутить в имплантат для проведения замеров
Пин параллельности	Инструмент для определения наклона установленного имплантата. Основной материал: Нержавеющая сталь	Установить в костную полость после применения начальной фрезы.
Удлинитель фрезы	Переходник для удлинения фрезы Основной материал: Сталь	Вставить фрезу для формирования ложа имплантата в удлинитель фрезы
Динамометрический ключ	Инструмент для установки и извлечения имплантата Основной материал: Сталь	Соединить с динамометром перед применением
Коннектор контругловой	Переходник для кортикального метчика, используемого для формирования ложа имплантата. Основной материал: Сталь	Присоединить к наконечнику физиодиспенсера, вставить фрезу, сформировать отверстие в кости.
Глубиномер	Инструмент для определения глубины сформированного отверстия. На инструменте присутствует мерная шкала с шагом 1 мм Основной материал: Титан	Установить в полость, измерить глубину
Держатель отвертки	Инструмент для работы с шестигранной отверткой Основной материал: Нержавеющая сталь	Зафиксировать в шестигранной отвертке при работе с винтами или абатментами
Имплантовод	Инструмент для установки имплантата, фиксации шаровидного абатмента и для	С помощью имплантовода ввести имплантат в кость, зафиксировать абатмент на имплантате

Инструкция по применению на медицинское изделие:

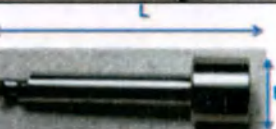
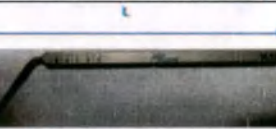
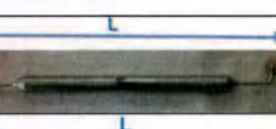
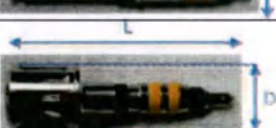
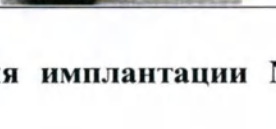
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

	установки имплантата храповым ключом Основной материал: Сталь	
--	--	--

Таблица 6.9.2. Основные размеры

№2	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм		Внешний вид
1.	Фреза Линдемманна	LDS23C	35,8	2,3		
2.	Фреза хирургическая	TSD22CS	34,7	2,2		
3.	Фреза хирургическая	TSD22CL	40,7	2,2		
4.	Фреза хирургическая	TSD30CS	34,7	3,0		
5.	Фреза хирургическая	TSD30CL	40,7	3,0		
6.	Фреза хирургическая	TSD35CS	34,7	3,5		
7.	Фреза хирургическая	TSD35CL	40,7	3,5		
8.	Фреза хирургическая	TSD40CS	34,7	4,0		
9.	Фреза хирургическая	TSD40CL	40,7	4,0		
10.	Фреза хирургическая	TSD45CS	34,7	4,5		
11.	Фреза хирургическая	TSD45CL	40,7	4,5		
12.	Кортикальная фреза	ISCD35F	33,0	2,95		
13.	Кортикальная фреза	ISCD40F	33,0	3,45		
14.	Кортикальная фреза	ISCD45F	33,0	3,95		
15.	Кортикальная фреза	ISCD50F	33,0	4,45		
16.	Метчик кортикальный	PTAP35F S	13,9	3,8		
17.	Метчик кортикальный	PTAP40F S	13,9	4,3		
18.	Метчик кортикальный	PTAP45F S	13,9	4,5		
19.	Метчик кортикальный	PTAP50F S	13,9	5,0		
20.	Ограничитель фрез	DS030C	16,00	D1 5,5	D2 5,4	
21.	Ограничитель фрез	DS040C	15,00	D1 5,5	D2 5,4	
22.	Ограничитель фрез	DS050C	14,00	D1 5,5	D2 5,4	
23.	Ограничитель фрез	DS060C	13,00	D1 5,5	D2 5,4	
24.	Ограничитель фрез	DS066C	12,4	D1 5,5	D2 5,4	
25.	Ограничитель фрез	DS070C	11,7	D1 5,5	D2 5,4	
26.	Ограничитель фрез	DS085C	10,5	D1 5,5	D2 5,4	
27.	Ограничитель фрез	DS100C	9,00	D1 5,5	D2 5,4	
28.	Ограничитель фрез	DS115C	7,50	D1 5,5	D2 5,4	
29.	Ограничитель фрез	DS130C	6,00	D1	D2	

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

				5,5	5,4	
30.	Шестигранная отвертка	HD1210S	17,40	7,5		
31.	Шестигранная отвертка	HD1215S	22,40	7,5		
32.	Коннектор для метчика	RC10	18,0	5,0		
33.	Коннектор для метчика	RC15	23,0	5,0		
34.	Направляющий пин	DPIS35C	15,5	3,5		
35.	Направляющий пин	DPIS45C	15,5	4,5		
36.	Пин параллельности	PP07F	15,8	4,3		
37.	Пин параллельности	PP08F	18,8	4,3		
38.	Пин параллельности	PP10F	21,8	4,3		
39.	Удлинитель фрезы	DE01	29,5	4,5		
40.	Динамометрический ключ	TW60	101,10	1,7		
41.	Коннектор контругловой	CAA00	18,0	5,0		
42.	Глубиномер	DG17	100,9	1,7		
43.	Держатель отвертки	DH02	157,65	5,9		
44.	Имплантовод	ISFD05C	27,7	4,0		
45.	Имплантовод	ISFD05C L	32,7	4,0		
46.	Имплантовод	ISFD10R	22,7	7,5		
47.	Имплантовод	ISFD15R	27,7	7,5		

6.10. Набор вспомогательных хирургических инструментов для имплантации NEO SURGICAL ACCESSORY KIT, артикул ACCKIT

Таблица 6.10.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Маркер диаметра имплантата	Фреза для подбора диаметра имплантата Основной материал: Сталь	Подобрать согласно размеру устанавливаемых имплантатов
Фреза планировщик кости	Фреза для сглаживания неровностей кости. Основной материал: Сталь	Установить фрезу в наконечник физиодиспенсера, расположить в зоне предполагаемой установки имплантата. Вывернуть кость

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

Фреза профилировщик кости	Фреза для выравнивания кости вокруг имплантата Основной материал: Сталь	При избыточном нарастании кости в зоне установленного имплантата. Установить фрезу в наконечник физиодиспенсера, выровнять кость в области имплантата
Шестигранная отвертка-ключ	Отвертка для фиксации заглушки, формирователя, абатмента Основной материал: Сталь	Установить отвертку в наконечник физиодиспенсера, закрутить заглушку, формирователь, абатмент
Мукотом	Фреза для формирования отверстия в слизистой Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на слизистую оболочку в зоне операции. Сформировать отверстие в слизистой
Коннектор для метчика	Инструмент для формирования отверстия в кости под имплантат Основной материал: Сталь	Для использования фрез с динамометрическим ключом

Таблица 6.10.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Внешний вид
1.	Маркер диаметра имплантата	DM35	27,4	3,8	
2.	Маркер диаметра имплантата	DM40	27,4	4,3	
3.	Маркер диаметра имплантата	DM45	27,4	4,5	
4.	Маркер диаметра имплантата	DM50	27,4	5,0	
5.	Маркер диаметра имплантата	DM55	27,4	5,5	
6.	Маркер диаметра имплантата	DM60	27,4	6,0	
7.	Фреза планировщик кости	BP35	25,4	4,1	
8.	Фреза планировщик кости	BP40	25,4	4,6	
9.	Фреза планировщик кости	BP50	25,4	5,3	
10.	Фреза планировщик кости	BP65	25,4	6,5	
11.	Фреза планировщик кости	BP80	25,4	7,95	
12.	Фреза профилировщик кости	BPN40	28,9	1,25	
13.	Фреза профилировщик кости	BPR50	28,9	1,5	
14.	Фреза профилировщик кости	BPI60	28,9	2,05	
15.	Фреза профилировщик кости	BPB60	28,9	1,5	
16.	Фреза профилировщик кости	ISBP48	34,1	4,8	
17.	Фреза профилировщик кости	ISBP55	34,1	5,5	

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

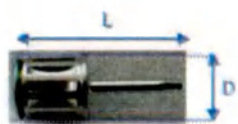
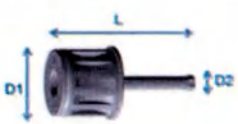
18.	Фреза профилировщик кости	ISBP60	34,1	6,0	
19.	Шестигранная отвертка-ключ	QTH1215	38,40	1,19	
20.	Шестигранная отвертка-ключ	QTH12515	38,40	1,26	
21.	Мукотом	TP35	30,0	4,3	
22.	Мукотом	TP40	30,0	4,8	
23.	Мукотом	TP45	30,0	5,3	
24.	Мукотом	TP50	30,0	5,8	
25.	Коннектор для метчика	RC15	23,0	5,0	

6.11. Набор универсальный ортопедический для работы с различными имплантационными системами, артикул UVPRTKIT

Таблица 6.11.1. Описание, порядок применения

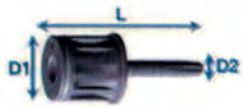
Компонент набора	Описание	Порядок применения
Шестигранная отвертка	Отвертка для фиксации абатмента. Основной материал: Сталь	С помощью отвертки зафиксировать абатмент к имплантату
Отвертка	Инструмент для фиксации, определения положения и извлечения абатмента, а также для фиксации заглушки формователя абатмента. Основной материал: Сталь	Установить вместе с абатментом на имплантат и зафиксировать
Держатель отвертки	Инструмент для работы с шестигранной отверткой. Основной материал: Нержавеющая сталь	Зафиксировать в шестигранной отвертке при работе с винтами или абатментами
Динамометрический ключ	Инструмент для установки и извлечения имплантата. Основной материал: Нержавеющая сталь	Соединить с динамометром перед применением

Таблица 6.11.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм		Внешний вид
1.	Шестигранная отвертка	HD1210S	17,40	7,5		
2.	Шестигранная отвертка	HD1215S	22,40	7,5		
3.	Шестигранная отвертка	HD12510S	17,40	7,5		
4.	Шестигранная отвертка	HD12515S	22,40	7,5		
5.	Отвертка	SCSD10S	17,4	D1 7,5	D2 1,73	
6.	Отвертка	SCSD15S	22,4	D1 7,5	D2 1,73	

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

7.	Отвертка	UGD10S	17,4	D1 7,5	D2 1,7	
8.	Отвертка	UGD15S	22,4	D1 7,5	D2 1,7	
9.	Держатель отвертки	DH02	157,65	5,9		
10.	Динамометрический ключ	TW60	101,10	1,7		

6.12. Набор для протезирования, артикул PRTKIT

Таблица 6.12.1. Описание, порядок применения

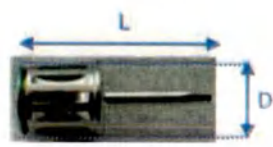
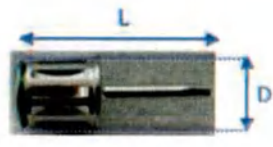
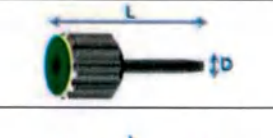
Компонент набора	Описание	Порядок применения
Шестигранная отвертка	Отвертка для фиксации абатмента Основной материал: Сталь	С помощью отвертки шестигранной зафиксировать абатмент к имплантату
Шестигранная отвертка для углового наконечника	Отвертка для затягивания винта для устройства для извлечения имплантатов. Основной материал: Сталь	С помощью отвертки зафиксировать абатмент к имплантату
Ручная отвертка	Отвертка для затягивания винта для устройства для извлечения имплантатов Основной материал: Сталь	Установить вместе с абатментом на имплантат и зафиксировать
Шестигранная отвертка для динамометрического ключа	Инструмент, используемый для присоединения или отсоединения винтов и винтов-заглушек. Основной материал: Сталь	Установить вместе с абатментом на имплантат и зафиксировать
Угловая отвертка	Отвертка, позволяющая устанавливать и извлекать винты под различными углами и в различных направлениях Основной материал: Титан	Установить вместе с абатментом на имплантат и зафиксировать
Позиционер абатмента	Инструмент, используемый для захвата абатмента после его сборки с шестигранной отверткой Основной материал: Сталь	Установить вместе с абатментом на имплантат и зафиксировать
Динамометрический ключ	Инструмент для установки и извлечения имплантата Основной материал: Нержавеющая сталь	Соединить с динамометром перед применением

Таблица 6.12.2. Основные размеры

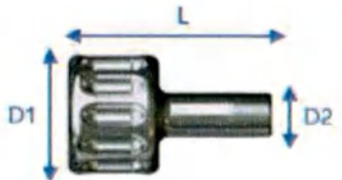
№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Внешний вид
1.	Шестигранная отвертка	HD1210S	17,40	7,5	

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

2.	Шестигранная отвертка	HD1215S	22,40	7,5		
3.	Шестигранная отвертка	HD1220S	27,40	7,5		
4.	Шестигранная отвертка	HD1225S	32,40	7,5		
5.	Шестигранная отвертка	HD12510S	17,40	7,5		
6.	Шестигранная отвертка	HD12515S	22,40	7,5		
7.	Шестигранная отвертка	HD12520S	27,40	7,5		
8.	Шестигранная отвертка	HD12525S	32,40	7,5		
9.	Шестигранная отвертка для углового наконечника	HDC1210	24,50	1,19		
10.	Шестигранная отвертка для углового наконечника	HDC1215	29,50	1,19		
11.	Шестигранная отвертка для углового наконечника	HDC12510	24,50	1,26		
12.	Шестигранная отвертка для углового наконечника	HDC12515	29,50	1,26		
13.	Ручная отвертка	HDH1220S	30,40	1,19		
14.	Ручная отвертка	HDH12520S	30,40	1,26		
15.	Шестигранная отвертка для динамометрического ключа	HD1220RCS	27,4	D1 7,5	D2 1,2	
16.	Шестигранная отвертка для динамометрического ключа	HD12520RCS	27,4	D1 7,5	D2 1,27	
17.	Угловая отвертка	HDA1215S	22,4	D1 7,5	D2 1,2	
18.	Угловая отвертка	HDA1220S	27,4	D1 7,5	D2 1,2	
19.	Угловая отвертка	HDA12515S	22,4	D1 7,5	D2 1,27	
20.	Угловая отвертка	HDA12520S	27,4	D1 7,5	D2 1,27	
21.	Позиционер абатмента	AP202N	6,00	D1 7,0	D2 2,65	

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

22.	Позиционер абатмента	AP205N	9,00	D1 7,0	D2 2,65	
23.	Позиционер абатмента	AP207N	11,00	D1 7,0	D2 2,65	
24.	Позиционер абатмента	AP252N	6,00	D1 7,0	D2 2,95	
25.	Позиционер абатмента	AP255N	9,00	D1 7,0	D2 2,95	
26.	Позиционер абатмента	AP257N	11,00	D1 7,0	D2 2,95	
27.	Динамометрический ключ	TW60	101,10	1,7		

6.13. Набор для снятия оттисков Neo PickCap, артикул PCIKIT

Таблица 6.13.1. Описание, порядок применения

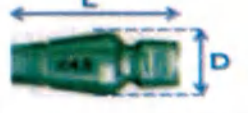
Компонент набора	Описание	Порядок применения
Позиционер абатмента	Инструмент, используемый для захвата абатмента после его сборки с шестигранной отверткой Основной материал: Сталь	Установить вместе с абатментом на имплантат и зафиксировать
Шестигранная отвертка	Отвертка для фиксации абатмента Основной материал: Сталь	С помощью отвертки шестигранной зафиксировать абатмент к имплантату.
Трансфер оттисковый PickCap с винтом для колпачка оттискового PickCap	Используется для изготовления слепка внутри ротовой полости Основной материал: Титан	Прикрепить к имплантату, установленному в ротовой полости, сделать слепок прикуса
Колпачок оттисковый PickCap	Служит для повышения точности создаваемого слепка Основной материал: ПОЛИАРИЛЭФИРСУЛЬФОН	Прикрепить к имплантату, установленному в ротовой полости, сделать слепок прикуса
Пинцет	Инструмент для захвата Основной материал: Сталь	Использовать для удержания мелких деталей

Таблица 6.13.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм		Внешний вид
1.	Позиционер абатмента	AP165N	9,00	D1 7,0	D2 2,45	
2.	Шестигранная отвертка	HD1215S	22,40	7,5		
3.	Шестигранная отвертка	HD1220S	27,40	7,5		
4.	Шестигранная отвертка	HD1225S	32,40	7,5		
5.	Трансфер оттисковый PickCap ISPCIB3503 с винтом для колпачка оттискового PickCap ISPCIS20	ISPCIB3503	10,0	3,6		

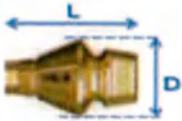
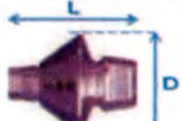
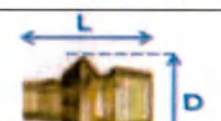
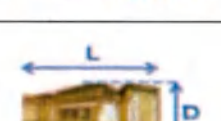
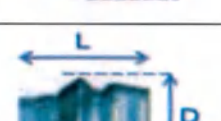
Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

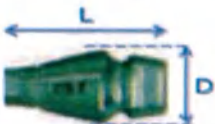
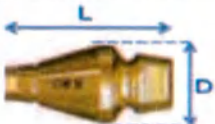
6.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB3510 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB35 10	17,0	3,6	
7.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB4008 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB40 08	15,0	4,1	
8.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB3505 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB35 05	12,0	3,6	
9.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB4003 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB40 03	10,0	4,1	
10.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB4010 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB40 10	17,0	4,1	
11.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB3508 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB35 08	15,0	3,6	
12.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB4005 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB40 05	12,0	4,1	
13.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB403 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB40 3	10,0	4,6	
14.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB405 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB40 5	12,0	4,6	
15.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB502 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB50 2	9,2	5,3	
16.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB505 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB50 5	12,2	5,3	
17.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB603 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB60 3	10,2	5,8	
18.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB606 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB60 6	13,2	5,8	

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

19.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB704 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB70 4	11,2	6,6	
20.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB803 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB80 3	10,2	8,0	
21.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB904 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB90 4	11,2	9,0	
22.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB408 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB40 8	15,0	4,6	
23.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB503 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB50 3	10,2	5,3	
24.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB506 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB50 6	13,2	5,3	
25.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB604 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB60 4	11,2	5,8	
26.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB702 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB70 2	9,2	6,6	
27.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB705 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB70 5	12,2	6,6	
28.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB804 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB80 4	11,2	8,0	
29.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB410 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB41 0	17,0	4,6	
30.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB504 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB50 4	11,2	5,3	
31.	Трансфер оттискный PickCar ISPCIB602 с винтом для колпачка оттискного PickCar ISPCIS20	ISPCIB60 2	9,2	5,8	

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

32.	Трансфер оттискный PickCap ISPCIB605 с винтом для колпачка оттискного PickCap ISPCIS20	ISPCIB605	12,2	5,8	
33.	Трансфер оттискный PickCap ISPCIB703 с винтом для колпачка оттискного PickCap ISPCIS20	ISPCIB703	10,2	6,6	
34.	Трансфер оттискный PickCap ISPCIB706 с винтом для колпачка оттискного PickCap ISPCIS20	ISPCIB706	13,2	6,6	
35.	Трансфер оттискный PickCap ISPCIB903 с винтом для колпачка оттискного PickCap ISPCIS20	ISPCIB903	10,2	9,0	
36.	Колпачок оттискный PickCap	PCISC01	4,4	5,25	
37.	Колпачок оттискный PickCap	PCILC01	4,4	6,6	
38.	Пинцет	PCIPC	164,0	-	

6.14. Набор хирургический NEO NAVIGUIDE KIT для установки имплантатов со втулками для хирургических шаблонов, артикул NEONGKIT

Таблица 6.14.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Фреза начальная	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Фреза коническая	Используется после финишного сверления для расширения отверстия, в которое с легкостью устанавливается платформа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Фреза пилотная	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Кортикальная фреза	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Метчик кортикальный	Фреза для формирования резьбы в кости при установке имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать резьбу в отверстии в кости

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

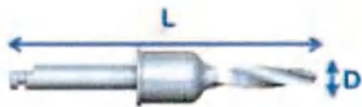
Триммер для костей	Фреза для выравнивания кости вокруг имплантата при ее избыточном нарастании в зоне установленного имплантата Основной материал: Сталь	Установить фрезу в наконечник физиодиспенсера, выровнять кость в области имплантата.
Фреза профилировщик кости	Фреза для выравнивания кости вокруг имплантата Основной материал: Сталь	При избыточном нарастании кости в зоне установленного имплантата. Установить фрезу в наконечник физиодиспенсера, выровнять кость в области имплантата
Шестигранная отвертка	Отвертка для фиксации абатмента Основной материал: Сталь	С помощью отвертки шестигранной зафиксировать абатмент к имплантату
Мукотом	Фреза для формирования отверстия в слизистой Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на слизистую оболочку в зоне операции. Сформировать отверстие в слизистой
Удлинитель фрезы	Переходник для удлинения фрезы Основной материал: Сталь	Вставить фрезу для формирования ложа имплантата в удлинитель фрезы
Динамометрический ключ	Инструмент для установки и извлечения имплантата Основной материал: Сталь	Соединить с динамометром перед применением
Вертикальный фиксатор	Инструмент для фиксации съемного шаблона в имплантате при имплантации и фиксации съемного шаблона в кости при имплантации с винтом Основной материал: Титан	Зафиксировать в имплантате через отверстие хирургического шаблона
Коннектор контругловой	Переходник для кортикального метчика, используемого для формирования ложа имплантата. Основной материал: Сталь	Присоединить к наконечнику физиодиспенсера, вставить фрезу, сформировать отверстие в кости.
Коннектор для метчика	Инструмент для формирования отверстия в кости под имплантат Основной материал: Сталь	Для использования фрез с динамометрическим ключом
Доводчик имплантата с ограничителем	Доводчик имплантата используется после установки имплантата и удаления хирургической направляющей, для измерения момента вращения имплантата и дополнительной фиксации Основной материал: Титан	Зафиксировать в имплантате при применении хирургического шаблона
Доводчик имплантата без ограничителя	Доводчик имплантата используется после установки имплантата и удаления хирургической направляющей, для измерения момента вращения имплантата и дополнительной фиксации Основной материал: Титан	Зафиксировать в имплантате при применении хирургического шаблона

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

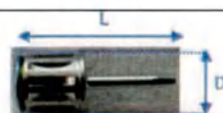
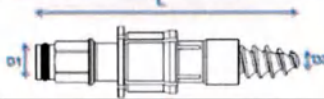
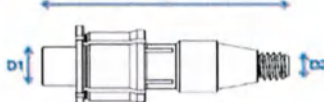
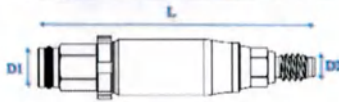
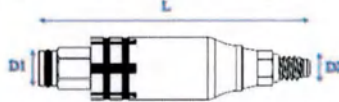
Отвертка для доводчика импланта	Инструмент, помогающий извлечь доводчик имплантата из имплантата Основной материал: Сталь	Закрутить в доводчик имплантата при его заклинивании внутри имплантата
Имплантовод	Инструмент для установки имплантата, фиксации шаровидного абатмента и для установки имплантата храповым ключом Основной материал: Сталь	С помощью имплантовода ввести имплантат в кость, зафиксировать абатмент на имплантате

Таблица 6.14.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Внешний вид
1.	Фреза начальная	NGTWD2207	32,5	2,2	
2.	Фреза начальная	NGTWD2208	33,7	2,2	
3.	Фреза начальная	NGTWD2210	35,2	2,2	
4.	Фреза начальная	NGTWD2211	36,7	2,2	
5.	Фреза начальная	NGTWD2213	38,2	2,2	
6.	Фреза коническая	NGTD3007	32,5	3,0	
7.	Фреза коническая	NGTD3008	33,7	3,0	
8.	Фреза коническая	NGTD3010	35,2	3,0	
9.	Фреза коническая	NGTD3011	36,7	3,0	
10.	Фреза коническая	NGTD3013	38,2	3,0	
11.	Фреза коническая	NGTD3507	32,5	3,5	
12.	Фреза коническая	NGTD3508	33,7	3,5	
13.	Фреза коническая	NGTD3510	35,2	3,5	
14.	Фреза коническая	NGTD3511	36,7	3,5	
15.	Фреза коническая	NGTD3513	38,2	3,5	
16.	Фреза коническая	NGTD4007	32,5	4,0	
17.	Фреза коническая	NGTD4008	33,7	4,0	
18.	Фреза коническая	NGTD4010	35,2	4,0	
19.	Фреза коническая	NGTD4011	36,7	4,0	
20.	Фреза коническая	NGTD4013	38,2	4,0	
21.	Фреза коническая	NGTD4507	32,5	4,5	
22.	Фреза коническая	NGTD4508	33,7	4,5	
23.	Фреза коническая	NGTD4510	35,2	4,5	
24.	Фреза коническая	NGTD4511	36,7	4,5	
25.	Фреза коническая	NGTD4513	38,2	4,5	
26.	Фреза пилотная	NGPD22	32,7	2,2	
27.	Кортикальная фреза	NGCD40F	32,5	3,45	
28.	Кортикальная фреза	NGCD45F	32,5	3,95	

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

29.	Кортикальная фреза	NGCD50F	32,5	4,45			
30.	Метчик кортикальный	NGISCT40R	21,2	4,3			
31.	Метчик кортикальный	NGISCT45R	21,2	4,5			
32.	Метчик кортикальный	NGISCT50 W	21,2	5,0			
33.	Триммер для костей	NGBT00	25,00	5,17			
34.	Триммер для костей	NGBT15	26,50	5,17			
35.	Триммер для костей	NGBT30	28,00	5,17			
36.	Фреза профилировщик кости	ISBP55	34,1	5,5			
37.	Фреза профилировщик кости	ISBP60	34,1	6,0			
38.	Шестигранная отвертка	HD1215S	22,40	7,5			
39.	Мукотом	NGTP43R	26,5	4,3			
40.	Удлинитель фрезы	DE01	29,5	4,5			
41.	Динамометрический ключ	TW60	101,10	1,7			
42.	Вертикальный фиксатор	SGVABRW	20,7	D1 5,8	D2 3,7		
43.	Вертикальный фиксатор	SGISVAFRW	16,6	D1 5,8	D2 3,3		
44.	Коннектор контругловой	SGCAC00	19,5	5,0			
45.	Коннектор метчика для	SGRC10	17,0	7,5			
46.	Доводчик импланта с ограничителем	SGISFARW	19,5	D1 2,85	D2 1,95		
47.	Доводчик имплантата без ограничителя	SGISFARW 30	21,5	D1 2,85	D2 1,95		
48.	Отвертка для доводчика импланта	SGFART20	30,30	D1 7,5	D2 1,95		

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

49.	Имплантовод	NGISFDR	30,0	3,34	
50.	Имплантовод	NGISFDCA	32,5	5,17	

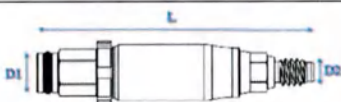
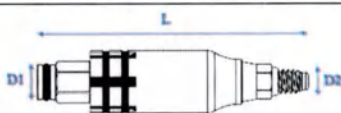
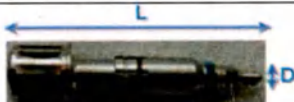
6.15. Мини- навигационный набор для имплантатов систем IS-II active, IS-III active, артикул NEONGNKIT

Таблица 6.15.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Фреза начальная	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Финишная фреза	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Фреза пилотная	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Метчик кортикальный	Фреза для формирования резьбы в кости при установке имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать резьбу в отверстии в кости
Удлинитель фрезы	Переходник для удлинения фрезы Основной материал: Сталь	Вставить фрезу для формирования ложа имплантата в удлинитель фрезы
Коннектор контругловой	Переходник для кортикального метчика, используемого для формирования ложа имплантата. Основной материал: Сталь	Присоединить к наконечнику физиодиспенсера, вставить фрезу, сформировать отверстие в кости.
Коннектор для метчика	Инструмент для формирования отверстия в кости под имплантат Основной материал: Сталь	Для использования фрез с динамометрическим ключом
Фиксатор имплантата	используется после установки имплантата и удаления хирургической направляющей, для дополнительной фиксации. Основной материал: Титан	Зафиксировать в имплантате при применении хирургического шаблона
Имплантовод	Инструмент для установки имплантата, фиксации шаровидного абатмента и для установки имплантата храповым ключом Основной материал: Сталь	С помощью имплантовода ввести имплантат в кость, зафиксировать абатмент на имплантате

Таблица 6.15.2. Основные размеры

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм		Внешний вид
1.	Фреза начальная	NGTWD2208N	33,7	2,2		
2.	Фреза начальная	NGTWD2210N	35,2	2,2		
3.	Фреза начальная	NGTWD2211N	36,7	2,2		
4.	Фреза начальная	NGTWD2213N	38,2	2,2		
5.	Фреза начальная.	NGTWD2214N	39,7	2,2		
6.	Финишная фреза	NGTD3008N	33,7	3,0		
7.	Финишная фреза	NGTD3010N	35,2	3,0		
8.	Финишная фреза	NGTD3011N	36,7	3,0		
9.	Финишная фреза	NGTD3013N	38,2	3,0		
10.	Финишная фреза	NGTD3014N	39,7	3,0		
11.	Фреза пилотная	NGPD22N	32,7	2,2		
12.	Метчик кортикальный	NGISCT35N	21,2	3,8		
13.	Метчик кортикальный	NGISCT35NS	21,2	3,8		
14.	Удлинитель фрезы	DE01	29,5	4,5		
15.	Коннектор контругловой	SGCAC00	19,5	5,0		
16.	Коннектор метчика	для SGRC10	17,0	7,5		
17.	Фиксатор имплантата	SGISFAN	19,5	D1 2,85	D2 1,95	
18.	Фиксатор имплантата	SGISFAN30	21,5	D1 2,85	D2 1,95	
19.	Имплантовод	NGISFDRN	29,6	3,19		
20.	Имплантовод	NGISFDCAN	32,1	4,07		

6.16. Набор ограничителей сверла Stop Drill KIT, артикул STOPDRILLKIT

Таблица 6.16.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Стоппер-ограничитель сверла	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Титан	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости

Инструкция по применению на медицинское изделие:

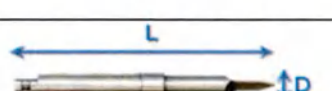
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

Фреза пилотная	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Шестигранная отвертка	Отвертка для фиксации абатмента Основной материал: Сталь	С помощью отвертки шестигранной зафиксировать абатмент к имплантату
Удлинитель фрезы	Переходник для удлинения фрезы Основной материал: Сталь	Вставить фрезу для формирования ложа имплантата в удлинитель фрезы
Коннектор для метчика	Инструмент для формирования отверстия в кости под имплантат Основной материал: Сталь	Для использования фрез с динамометрическим ключом
Динамометрический ключ	Инструмент для установки и извлечения имплантата Основной материал: Сталь	Соединить с динамометром перед применением
Спейсер	Инструмент, устанавливающийся на пин параллельности для фиксации расстояния между формируемыми отверстиями в костной ткани, формирует заданный размер спейсера промежутков. Основной материал: Силикон	Установить спейсер необходимого диаметра на пин параллельности
Пин параллельности	Инструмент для определения наклона установленного имплантата Основной материал: Нержавеющая сталь	Установить в костную полость после применения начальной фрезы
Направляющий пин винтового имплантата	Инструмент для определения наклона установленного имплантата Основной материал: Титан	Вкрутить в имплантат для проведения замеров
Держатель шестигранной отвертки и глубиномер	Инструмент для работы с шестигранной отверткой и измерения глубины сформированного отверстия Основной материал: Нержавеющая сталь	Зафиксировать в шестигранной отвертке при работе с винтами или абатментами. Установить глубиномер в полость, измерить глубину

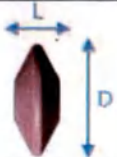
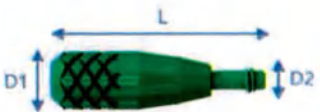
Таблица 6.16.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Внешний вид
1.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD2207F3	34,7	2,2	
2.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD2208F3	34,7	2,2	
3.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD2210F3	34,7	2,2	

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

4.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD2211F3	34,7	2,2	
5.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD2213F3	34,7	2,2	
6.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD3007F3	34,7	3,0	
7.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD3008F3	34,7	3,0	
8.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD3010F3	34,7	3,0	
9.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD3011F3	34,7	3,0	
10.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD3013F3	34,7	3,0	
11.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD3507F3	34,7	3,5	
12.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD3508F3	34,7	3,5	
13.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD3510F3	34,7	3,5	
14.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD3511F3	34,7	3,5	
15.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD3513F3	34,7	3,5	
16.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD4007F3	34,7	4,0	
17.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD4008F3	34,7	4,0	
18.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD4010F3	34,7	4,0	
19.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD4011F3	34,7	4,0	
20.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD4013F3	34,7	4,0	
21.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD4507F3	34,7	4,5	
22.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD4508F3	34,7	4,5	
23.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD4510F3	34,7	4,5	
24.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD4511F3	34,7	4,5	
25.	Стоппер-ограничитель сверла	TSD4513F3	34,7	4,5	
26.	Фреза пилотная	PD13	30,0	1,35	
27.	Шестигранная отвертка	HD1215S	22,40	7,5	

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

28.	Удлинитель фрезы	DE01	29,5	4,5	
29.	Коннектор для метчика	RC10	18,0	5,0	
30.	Динамометрический ключ	TW60	101,10	1,7	
31.	Спейсер	MDS4025	2,5	4,0	
32.	Спейсер	MDS7030	3,0	7,0	
33.	Спейсер	MDS8030	3,0	8,0	
34.	Пин параллельности	MDPP4050	21,5	-	
35.	Пин параллельности	MDPP6070	18,5	-	
36.	Пин параллельности	MDPP8090	15,5	-	
37.	Направляющий пин винтового имплантата	DP36	15,9	D1 3,6 D2 1,95	
38.	Направляющий пин винтового имплантата	DP45	15,9	D1 4,5 D2 1,95	
39.	Держатель шестигранной отвертки и глубиномер	DHDG	152,23	D1 1,7 D2 7,6	

6.17. Набор ортопедический Prosthetic Planning KIT, артикул P RTPN KIT

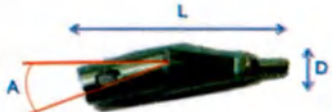
Таблица 6.17.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Ортопедический шаблон, прямой	Инструмент для подбора ортопедических компонентов для протезирования на имплантатах Основной материал: Титан	Установить абатмент в имплантат. Проверить соответствие высоты и диаметра абатмента
Ортопедический шаблон, угловой	Инструмент для подбора ортопедических компонентов для протезирования на имплантатах Основной материал: Титан	Установить абатмент в имплантат. Проверить соответствие высоты и диаметра абатмента

Таблица 6.17.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Угол, °	Внешний вид
1.	Ортопедический шаблон, прямой	PISAH415	12,35	4,5	-	

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

2.	Ортопедический прямой	шаблон,	PISAH515	12,35	5,2	
3.	Ортопедический прямой	шаблон,	PISAH615	12,35	5,7	
4.	Ортопедический прямой	шаблон,	PISAH715	12,35	6,5	
5.	Ортопедический прямой	шаблон,	PISAH425	13,35	4,5	
6.	Ортопедический прямой	шаблон,	PISAH525	13,35	5,2	
7.	Ортопедический прямой	шаблон,	PISAH625	13,35	5,7	
8.	Ортопедический прямой	шаблон,	PISAH725	13,35	6,5	
9.	Ортопедический прямой	шаблон,	PISAH435	14,35	4,5	
10.	Ортопедический прямой	шаблон,	PISAH535	14,35	5,2	
11.	Ортопедический прямой	шаблон,	PISAH635	14,35	5,7	
12.	Ортопедический прямой	шаблон,	PISAH735	14,35	6,5	
13.	Ортопедический прямой	шаблон,	PISAH445	15,35	4,5	
14.	Ортопедический прямой	шаблон,	PISAH545	15,35	5,2	
15.	Ортопедический прямой	шаблон,	PISAH645	15,35	5,7	
16.	Ортопедический прямой	шаблон,	PISAH745	15,35	6,5	
17.	Ортопедический угловой	шаблон,	PISAHA14 27	14,80	4,5	15 
18.	Ортопедический угловой	шаблон,	PISAHA14 47	16,80	4,5	
19.	Ортопедический угловой	шаблон,	PISAHB14 27	14,80	4,5	
20.	Ортопедический угловой	шаблон,	PISAHB14 47	16,80	4,5	
21.	Ортопедический угловой	шаблон,	PISAHA15 27	14,80	5,2	
22.	Ортопедический угловой	шаблон,	PISAHA15 47	16,80	5,2	
23.	Ортопедический угловой	шаблон,	PISAHB15 27	14,80	5,2	
24.	Ортопедический угловой	шаблон,	PISAHB15 47	16,80	5,2	
25.	Ортопедический угловой	шаблон,	PISAHA16 27	14,80	5,7	
26.	Ортопедический угловой	шаблон,	PISAHA16 47	16,80	5,7	
27.	Ортопедический угловой	шаблон,	PISAHB16 27	14,80	5,7	

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

28.	Ортопедический угловой шаблон,	PISAHB1647	16,80	5,7	25	
29.	Ортопедический угловой шаблон,	PISAHА2427	14,80	4,5		
30.	Ортопедический угловой шаблон,	PISAHА2447	16,80	4,5		
31.	Ортопедический угловой шаблон,	PISAHB2427	14,80	4,5		
32.	Ортопедический угловой шаблон,	PISAHB2447	16,80	4,5		
33.	Ортопедический угловой шаблон,	PISAHА2527	14,80	5,2		
34.	Ортопедический угловой шаблон,	PISAHА2547	16,80	5,2		
35.	Ортопедический угловой шаблон,	PISAHB2527	14,80	5,2		
36.	Ортопедический угловой шаблон,	PISAHB2547	16,80	5,2		

6.18. Набор для синус-лифтинга, артикул SAKIT

Таблица 6.18.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Фреза начальная	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Фреза хирургическая	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
S-риммер	Фреза для формирования доступа к верхнечелюстной пазухе Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
C-риммер	Фреза для формирования костного блока Основной материал: Сталь	Установить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Расположить в области верхнечелюстной пазухи и выпилить костный блок с формированием доступа в пазуху
C-Guide-риммер	Фреза для кернения кости Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
LS-риммер	Фреза для сошлифовывания кости без повреждения мембраны пазухи Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Боковой резак	Фреза для расширения костного окна Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости

Инструкция по применению на медицинское изделие:

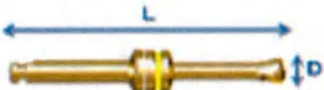
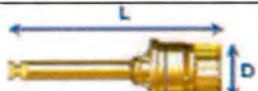
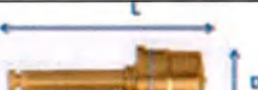
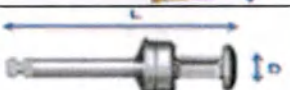
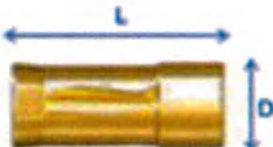
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

Стоппер Crestal	Стоппер-ограничитель для фрезы Основной материал: Титан	Установить на фрезу. Ограничивает глубину проникновения фрезы.
Боковой стоппер	Стоппер-ограничитель для фрезы «Боковой резак» Основной материал: Титан	Установить на фрезу. Ограничивает глубину проникновения фрезы
Устройство для ввода жидкости	Устройство для подачи жидкости в пазуху под мембрану Основной материал: Сталь	Установить в костную полость в месте доступа к пазухе, присоединить шланг, соединенный со шприцем, провести гидросепаровку мембраны верхнечелюстного синуса с помощью жидкости под давлением из шприца
Аква-Система	Приспособления для совместного использования с устройством для подачи жидкости при проведении синус-лифтинга, включающие в себя переходник (AQSRGC) и гибкий шланг (AQHST), присоединяющийся к шприцу Основной материал: Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК)	Присоединить гибкий шланг (AQHST) к устройству для подачи жидкости через переходник (AQSRGC), соединенный со шприцем. Провести гидросепаровку мембраны верхнечелюстного синуса с помощью жидкости под давлением из шприца
Глубиномер	Инструмент для определения глубины сформированного отверстия. На инструменте присутствует мерная шкала с шагом 1 мм Основной материал: Титан	Установить в полость, измерить глубину
Инструмент для внесения костного материала	Инструмент для внесения костной стружки в сформированное отверстие Основной материал: Нержавеющая сталь	Заполнить костным материалом и внести в костную полость
Уплотнитель костного материала	Инструмент для уплотнения внесенной костной стружки Основной материал: Нержавеющая сталь	С помощью инструмента произвести паковку и уплотнение костной стружки
Ручка дрели	Инструмент для удержания дрели Основной материал: Алюминий	Для использования фрез без углового наконечника физиодиспенсера. Вставить дрель в рукоятку, использовать ручную
Роторный элеватор	Инструмент, сочетающий в себе функции костного спредера и устройства для внесения костного материала Основной материал: Сталь	Установить элеватор в наконечник физиодиспенсера, использовать для механического поднятия дна верхнечелюстной пазухи
Элеватор для синуса	Кюрета для отслаивания слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи Основной материал: Сталь	Отслоить слизистую пазухи с помощью кюреты через сформированное костное отверстие
Динамометрический ключ	Инструмент для установки и извлечения имплантата Основной материал: Сталь	Соединить с динамометром перед применением

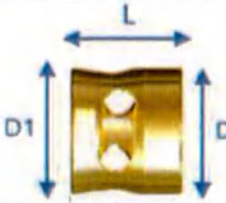
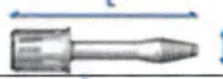
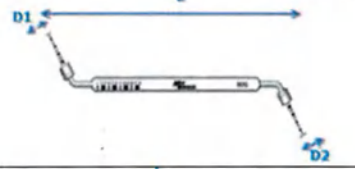
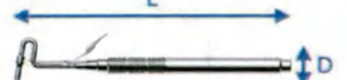
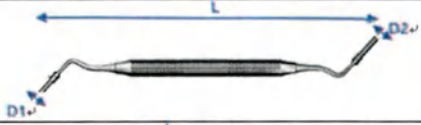
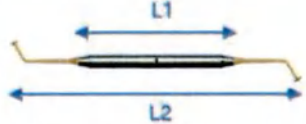
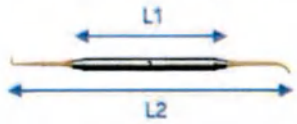
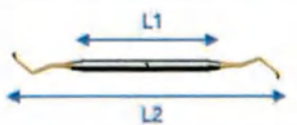
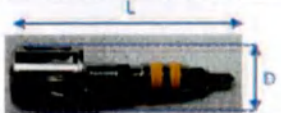
Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

Шестигранная отвертка	Отвертка для фиксации абатмента Основной материал: Сталь	С помощью отвертки шестигранной зафиксировать абатмент к имплантату
Имплантовод	Инструмент для установки имплантата, фиксации шаровидного абатмента и для установки имплантата храповым ключом Основной материал: Сталь	С помощью имплантовода ввести имплантат в кость, зафиксировать абатмент на имплантате

Таблица 6.18.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Внешний вид
1.	Фреза начальная	SAD22	31,7	2,2	
2.	Фреза хирургическая	SAD28	31,5	2,8	
3.	Фреза хирургическая	SAD32	31,5	3,2	
4.	Фреза хирургическая	SAD37	31,5	3,7	
5.	Фреза хирургическая	SAD40	31,5	4,0	
6.	S-риммер	SASR28	32,0	2,8	
7.	S-риммер	SASR32	32,0	3,2	
8.	S-риммер	SASR36	32,0	3,6	
9.	S-риммер	SASR39	32,0	3,9	
10.	C-риммер	SAC640	27,5	6,5	
11.	C-Guide-риммер	SACG610	27,5	7,8	
12.	LS-риммер	SALS640	27,6	6,5	
13.	Боковой резак	SCT30	24,2	2,74	
14.	Стоппер Crestal	CDS010	16,00	5,6	
15.	Стоппер Crestal	CDS020	15,00	5,6	
16.	Стоппер Crestal	CDS030	14,00	5,6	
17.	Стоппер Crestal	CDS040	13,00	5,6	
18.	Стоппер Crestal	CDS050	12,00	5,6	
18.	Стоппер Crestal	CDS060	11,00	5,6	
19.	Стоппер Crestal	CDS070	10,00	5,6	
20.	Стоппер Crestal	CDS080	9,00	5,6	
21.	Стоппер Crestal	CDS090	8,00	5,6	
22.	Стоппер Crestal	CDS100	7,00	5,6	
23.	Стоппер Crestal	CDS110	6,00	5,6	
24.	Стоппер Crestal	CDS120	5,00	5,6	
25.	Боковой стоппер	LTS010	6,70	D1, D2 7,85	
26.	Боковой стоппер	LTS020	5,70	D1, D2	

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

				7,85	
27.	Боковой стоппер	LTS030	4,70	D1, D2 7,85	
28.	Боковой стоппер	LTS040	3,70	D1, D2 7,85	
29.	Устройство для ввода жидкости	AQT	22,0	4,22	
30.	Аква-Система	AQST	390,0	11,5	
31.	Глубиномер	SADG01	125,2	D1 2,6 D2 3,1	
32.	Инструмент для внесения костного материала	JUMBO2	165,0	8,0	
33.	Уплотнитель костного материала	SABC01	170,0	D1 1,5 D2 2,2	
34.	Ручка дрели	SADH01	141,0	4,5	
35.	Роторный элеватор	SARE28	33,3	2,7	
36.	Роторный элеватор	SARE32	33,3	3,1	
37.	Роторный элеватор	SARE36	33,3	3,5	
38.	Роторный элеватор	SARE39	33,3	3,8	
39.	Элеватор для синуса	SLE01	L1 106,0 L2 168,0	-	
40.	Элеватор для синуса	SLE02	L1 106,0 L2 181,0	-	
41.	Элеватор для синуса	SLE03	L1 106,0 L2 184,0	-	
42.	Динамометрический ключ	TW60	101,1	1,7	
43.	Шестигранная отвертка	HD1215S	22,4	7,5	
44.	Имплантовод	ISFD05C	27,7	4,0	
45.	Имплантовод	ISFD10R	22,7	7,5	
46.	Имплантовод	ISFD15R	27,7	7,5	

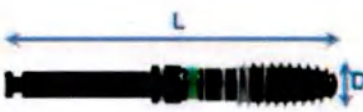
Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

6.19. Набор для расщепления альвеолярного гребня Ridge Wider KIT, артикул RWKIT

Таблица 6.19.1. Описание, порядок применения

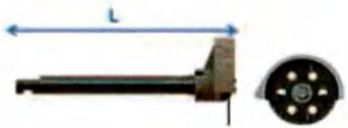
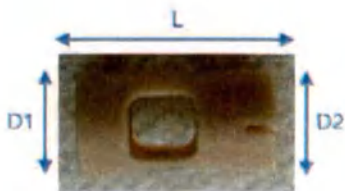
Компонент набора	Описание	Порядок применения
Фреза с винтовым креплением	Инструмент для установки фиксирующего имплантата Основной материал: Сталь	Установить фрезу в наконечник физиодиспенсера, сформировать отверстие в кости, необходимое для установки фиксирующего винта
Триммер для костей	Фреза для выравнивания кости вокруг имплантата при ее избыточном нарастании в зоне установленного имплантата Основной материал: Сталь	Установить фрезу в наконечник физиодиспенсера, выровнять кость в области имплантата
Костный расширитель	Инструмент для расширения костной ткани Основной материал: Сталь	Установить в наконечник физиодиспенсера, вкрутить в костную ткань до расширения отверстия
Диск-нож	Фреза дисковидной формы для отпиливания костного блока при костной пластике Основной материал: Нержавеющая сталь	Установить фрезу в наконечник физиодиспенсера, применить в области кости
Стопор сверла с винтовым креплением	Стоппер-ограничитель для фрезы Основной материал: Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК)	Установить стопер на фрезу для ограничения погружения фрезы
Коннектор для метчика	Инструмент для формирования отверстия в кости под имплантат Основной материал: Сталь	Для использования фрез с динамометрическим ключом
Костное долото	Инструмент для расширения альвеолярного гребня Основной материал: Нержавеющая сталь	Расщепить узкий костный гребень с помощью долота

Таблица 6.19.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Внешний вид
1.	Фреза с винтовым креплением	SFD15	35,0	1,5	
2.	Триммер для костей	BTRI6010	30,0	6,0	
3.	Костный расширитель	BEXP30	32,8	3,0	
4.	Костный расширитель	BEXP35	32,8	3,5	
5.	Костный расширитель	BEXP40	32,8	4,0	
6.	Костный расширитель	BEXP45	32,8	4,5	
7.	Костный расширитель	BEXP50	32,8	5,0	

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

8.	Диск-нож	SAWD0703N	24,8	-		
9.	Диск-нож	SAWD1003N	24,8	-		
10.	Диск-нож	SAWD1303N	24,8	-		
11.	Диск-нож	SAWD0710N	25,75	-		
12.	Стопор сверла с винтовым креплением	SFDS030	9,5	D1 4,05	D2 4,5	
13.	Стопор сверла с винтовым креплением	SFDS050	7,5	D1 4,05	D2 4,5	
14.	Стопор сверла с винтовым креплением	SFDS070	5,5	D1 4,05	D2 4,5	
15.	Коннектор для метчика	RC15	23,0	5,0		
16.	Костное долото	BCHI60	141,1	-		

6.20. Набор Neo Master KIT, артикул NEOMKIT

Таблица 6.20.1. Описание, порядок применения

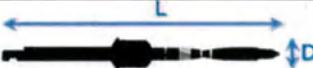
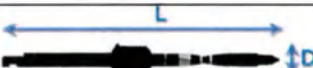
Компонент набора	Описание	Порядок применения
Фреза пилотная	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Фреза хирургическая	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Ограничитель фрез	Стоппер-ограничитель для фрезы Основной материал: Титан	Установить на фрезу. Ограничивает глубину проникновения фрезы
Спейсер	Инструмент, устанавливающийся на пин параллельности для фиксации расстояния между формируемыми отверстиями в костной ткани, формирует заданный размер спейсера Основной материал: Силикон	Установить спейсер необходимого диаметра на пин параллельности
Пин параллельности	Инструмент для определения наклона установленного имплантата Основной материал: Нержавеющая сталь	Установить в костную полость после применения начальной фрезы
Удлинитель фрезы	Переходник для удлинения фрезы Основной материал: Сталь	Вставить фрезу для формирования ложа имплантата в удлинитель фрезы
Динамометрический ключ	Инструмент для установки и извлечения имплантата Основной материал: Сталь	Соединить с динамометром перед применением

Инструкция по применению на медицинское изделие:

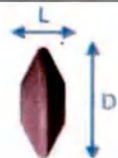
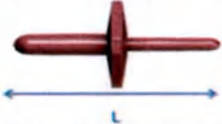
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

Коннектор метчика	Инструмент для формирования отверстия в кости под имплантат Основной материал: Сталь	Для использования фрез с динамометрическим ключом
Направляющий пин винтового импланта	Инструмент для определения наклона установленного имплантата Основной материал: Титан	Вкрутить в имплантат для проведения замеров
Шестигранная отвертка	Отвертка для фиксации абатмента Основной материал: Сталь	С помощью отвертки шестигранной зафиксировать абатмент к имплантату
Держатель шестигранной отвертки и глубиномер	Инструмент для работы с шестигранной отверткой и измерения глубины сформированного отверстия Основной материал: Нержавеющая сталь	Зафиксировать в шестигранной отвертке при работе с винтами или абатментами. Установить глубиномер в полость, измерить глубину

Таблица 6.20.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм		Внешний вид
1.	Фреза пилотная	PD13	30,0	1,35		
2.	Фреза хирургическая	TSD22CL	40,7	2,2		
3.	Фреза хирургическая	TSD30CL	40,7	3,0		
4.	Фреза хирургическая	TSD35CL	40,7	3,5		
5.	Фреза хирургическая	TSD40CL	40,7	4,0		
6.	Фреза хирургическая	TSD45CL	40,7	4,5		
7.	Фреза хирургическая	TSD22CS	34,7	2,2		
8.	Фреза хирургическая	TSD30CS	34,7	3,0		
9.	Фреза хирургическая	TSD35CS	34,7	3,5		
10.	Фреза хирургическая	TSD40CS	34,7	4,0		
11.	Фреза хирургическая	TSD45CS	34,7	4,5		
12.	Ограничитель фрез	DS030C	16,0	D1 5,5	D2 5,4	
13.	Ограничитель фрез	DS040C	15,0	D1 5,5	D2 5,4	
14.	Ограничитель фрез	DS050C	14,0	D1 5,5	D2 5,4	
15.	Ограничитель фрез	DS060C	13,0	D1 5,5	D2 5,4	
16.	Ограничитель фрез	DS066C	12,4	D1 5,5	D2 5,4	
17.	Ограничитель фрез	DS070C	11,7	D1 5,5	D2 5,4	
18.	Ограничитель фрез	DS085C	10,5	D1 5,5	D2 5,4	
19.	Ограничитель фрез	DS100C	9,0	D1 5,5	D2 5,4	

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

20.	Ограничитель фрез	DS115C	7,5	D1 5,5	D2 5,4	
21.	Ограничитель фрез	DS130C	6,0	D1 5,5	D2 5,4	
22.	Спейсер	MDS4025	2,5	4,0		
23.	Спейсер	MDS7030	3,0	7,0		
24.	Спейсер	MDS8030	3,0,	8,0		
25.	Пин параллельности	MDPP4050	21,5	-		
26.	Пин параллельности	MDPP6070	18,5	-		
27.	Пин параллельности	MDPP8090	15,5	-		
28.	Удлинитель фрезы	DE01	29,5	4,5		
29.	Динамометрический ключ	TW60	101,1	1,7		
30.	Коннектор метчика для	RC10	18,0	5,0		
31.	Коннектор метчика для	RC15	23,0	5,0		
32.	Направляющий пин винтового импланта	DP36	15,9	D1 3,6	D2 1,95	
33.	Направляющий пин винтового импланта	DP45	15,9	D1 4,5	D2 1,95	
34.	Шестигранная отвертка	HD1210S	17,4	7,5		
35.	Шестигранная отвертка	HD1215S	22,4	7,5		
36.	Держатель шестигранной отвертки и глубиномер	DHDG	152,23	D1 1,7	D2 7,6	

6.21. Набор Neo Core KIT, артикул NEOCKIT

Таблица 6.21.1. Описание, порядок применения

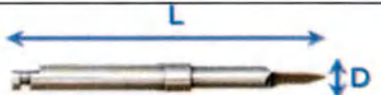
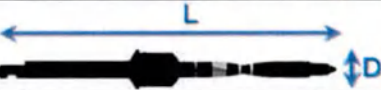
Компонент набора	Описание	Порядок применения
Фреза пилотная	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Фреза хирургическая	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Ограничитель фрез	Стоппер-ограничитель для фрезы Основной материал: Титан	Установить на фрезу. Ограничивает глубину проникновения фрезы
Пин параллельности	Инструмент для определения наклона установленного имплантата	Установить в костную полость после применения начальной фрезы

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

	Основной материал: Нержавеющая сталь	
Динамометрический ключ	Инструмент для установки и извлечения имплантата Основной материал: Сталь	Соединить с динамометром перед применением
Коннектор для метчика	Инструмент для формирования отверстия в кости под имплантат Основной материал: Сталь	Для использования фрез с динамометрическим ключом
Удлинитель фрезы	Переходник для удлинения фрезы Основной материал: Сталь	Вставить фрезу для формирования ложа имплантата в удлинитель фрезы
Шестигранная отвертка	Отвертка для фиксации абатмента Основной материал: Сталь	С помощью отвертки шестигранной зафиксировать абатмент к имплантату
Имплантовод	Инструмент для установки имплантата, фиксации шаровидного абатмента и для установки имплантата храповым ключом Основной материал: Сталь	С помощью имплантовода ввести имплантат в кость, зафиксировать абатмент на имплантате

Таблица 6.21.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм		Внешний вид
1.	Фреза пилотная	PD13	30,0	1,35		
2.	Фреза хирургическая	TSD22CS	34,7	2,2		
3.	Фреза хирургическая	TSD30CS	34,7	3,0		
4.	Фреза хирургическая	TSD35CS	34,7	3,5		
5.	Фреза хирургическая	TSD40CS	34,7	4,0		
6.	Фреза хирургическая	TSD45CS	34,7	4,5		
7.	Ограничитель фрез	DS070C	11,7	D1 5,5	D2 5,4	
8.	Ограничитель фрез	DS085C	10,5	D1 5,5	D2 5,4	
9.	Ограничитель фрез	DS100C	9,00	D1 5,5	D2 5,4	
10.	Ограничитель фрез	DS115C	7,50	D1 5,5	D2 5,4	
11.	Ограничитель фрез	DS130C	6,00	D1 5,5	D2 5,4	
12.	Пин параллельности	PP08F	18,8	4,3		
13.	Пин параллельности	PP10F	21,8	4,3		
14.	Динамометрический ключ	TW60	101,10	1,7		

15.	Коннектор для метчика	RC15	23,0	5,0	
16.	Удлинитель фрезы	DE01	29,5	4,5	
17.	Шестигранная отвертка	HD1215S	22,40	7,5	
18.	Имплантовод	ISFD05C	27,7	4,0	

6.22. Набор хирургический Neo surgical kit для установки имплантатов, артикул NEOSKIT

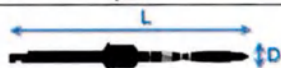
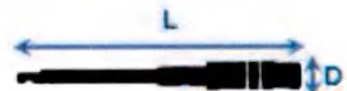
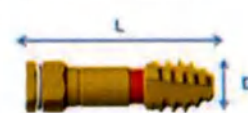
Таблица 6.22.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Фреза Линдемманна	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Фреза хирургическая	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Кортикальная фреза	Фреза для формирования ложа имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать отверстие в кости
Метчик кортикальный	Фреза для формирования резьбы в кости при установке имплантата Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Сформировать резьбу в отверстии в кости
Ограничитель фрез	Стоппер-ограничитель для фрезы Основной материал: Титан	Установить на фрезу. Ограничивает глубину проникновения фрезы
Коннектор для метчика	Инструмент для формирования отверстия в кости под имплантат Основной материал: Сталь	Для использования фрез с динамометрическим ключом
Направляющий пин	Инструмент для определения наклона установленного имплантата Основной материал: Титан	Вкрутить в имплантат для проведения замеров
Пин параллельности	Инструмент для определения наклона установленного имплантата Основной материал: Нержавеющая сталь	Установить в костную полость после применения начальной фрезы
Удлинитель фрезы	Переходник для удлинения фрезы Основной материал: Сталь	Вставить фрезу для формирования ложа имплантата в удлинитель фрезы
Динамометрический ключ	Инструмент для установки и извлечения имплантата	Соединить с динамометром перед применением

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

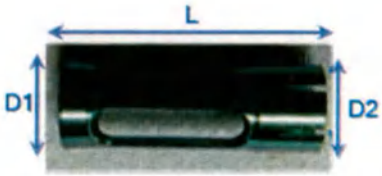
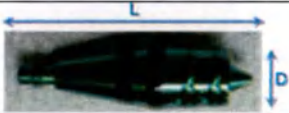
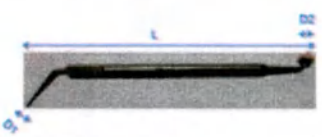
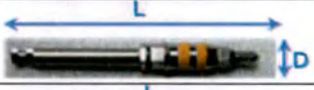
	Основной материал: Сталь	
Коннектор контругловой	Переходник для кортикального метчика, используемого для формирования ложа имплантата. Основной материал: Сталь	Присоединить к наконечнику физиодиспенсера, вставить фрезу, сформировать отверстие в кости.
Держатель шестигранной отвертки и глубиномер	Инструмент для работы с шестигранной отверткой и измерения глубины сформированного отверстия Основной материал: Нержавеющая сталь	Зафиксировать в шестигранной отвертке при работе с винтами или абатментами. Установить глубиномер в полость, измерить глубину
Шестигранная отвертка	Отвертка для фиксации абатмента Основной материал: Сталь	С помощью отвертки шестигранной зафиксировать абатмент к имплантату
Имплантовод	Инструмент для установки имплантата, фиксации шаровидного абатмента и для установки имплантата храповым ключом Основной материал: Сталь	С помощью имплантовода ввести имплантат в кость, зафиксировать абатмент на имплантате

Таблица 6.22.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм		Внешний вид
1.	Фреза Линдемманна	LDS23C	35,8	2,3		
2.	Фреза хирургическая	TSD22CS	34,7	2,2		
3.	Фреза хирургическая	TSD22CL	40,7	2,2		
4.	Фреза хирургическая	TSD30CS	34,7	3,0		
5.	Фреза хирургическая	TSD30CL	40,7	3,0		
6.	Фреза хирургическая	TSD35CS	34,7	3,5		
7.	Фреза хирургическая	TSD35CL	40,7	3,5		
8.	Фреза хирургическая	TSD40CS	34,7	4,0		
9.	Фреза хирургическая	TSD40CL	40,7	4,0		
10.	Фреза хирургическая	TSD45CS	34,7	4,5		
11.	Фреза хирургическая	TSD45CL	40,7	4,5		
12.	Кортикальная фреза	ISCD35F	33,0	2,95		
13.	Кортикальная фреза	ISCD40F	33,0	3,45		
14.	Кортикальная фреза	ISCD45F	33,0	3,95		
15.	Кортикальная фреза	ISCD50F	33,0	4,45		
16.	Метчик кортикальный	ISTD38S	13,9	3,8		
17.	Метчик кортикальный	ISTD43S	13,9	4,3		
18.	Метчик кортикальный	ISTD45S	13,9	4,5		
19.	Метчик кортикальный	ISTD50S	13,9	5,0		
20.	Ограничитель фрез	DS030C	16,00	D1 5,5	D2 5,4	
21.	Ограничитель фрез	DS040C	15,00	D1	D2	

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

				5,5	5,4		
22.	Ограничитель фрез	DS050C	14,00	D1 5,5	D2 5,4		
23.	Ограничитель фрез	DS060C	13,00	D1 5,5	D2 5,4		
24.	Ограничитель фрез	DS066C	12,4	D1 5,5	D2 5,4		
25.	Ограничитель фрез	DS070C	11,7	D1 5,5	D2 5,4		
26.	Ограничитель фрез	DS085C	10,5	D1 5,5	D2 5,4		
27.	Ограничитель фрез	DS100C	9,00	D1 5,5	D2 5,4		
28.	Ограничитель фрез	DS115C	7,50	D1 5,5	D2 5,4		
29.	Ограничитель фрез	DS130C	6,00	D1 5,5	D2 5,4		
30.	Коннектор для метчика	RC10	18,0	5,0			
31.	Коннектор для метчика	RC15	23,0	5,0			
32.	Направляющий пин	DPIS35C	15,5	3,5			
33.	Направляющий пин	DPIS45C	15,5	4,5			
34.	Пин параллельности	PP07F	15,8	4,3			
35.	Пин параллельности	PP08F	18,8	4,3			
36.	Пин параллельности	PP10F	21,8	4,3			
37.	Удлинитель фрезы	DE01	29,5	4,5			
38.	Динамометрический ключ	TW60	101,10	1,7			
39.	Коннектор контругловой	CAA00	18,0	5,0			
40.	Держатель шестигранной отвертки и глубиномер	DHDG	152,23	D1 1,7	D2 7,6		
41.	Шестигранная отвертка	HD1210S	17,40	7,5			
42.	Шестигранная отвертка	HD1215S	22,40	7,5			
43.	Имплантовод	ISFD05C	27,7	4,0			
44.	Имплантовод	ISFD05CL	32,7	4,0			
45.	Имплантовод	ISFD10R	22,7	7,5			

Инструкция по применению на медицинское изделие:
Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

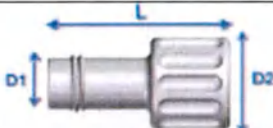
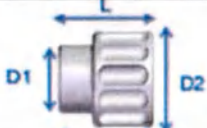
46.	Имплантовод	ISFD15R	27,7	7,5	
-----	-------------	---------	------	-----	--

6.23. Набор отверток, артикул FDHSET01

Таблица 6.23.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Отвертка	Инструмент для фиксации, определения положения и извлечения абатмента, а также для фиксации заглушки формирователя абатмента Основной материал: Сталь	Установить вместе с абатментом на имплантат и зафиксировать

Таблица 6.23.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм		Внешний вид
1.	Отвертка	FD00	12,5	D1 3,8	D2 7,0	
2.	Отвертка	FH00	8,5	D1 5,0	D2 7,0	

6.24. Набор для изготовления чипов, артикул NACM40ISETS

Таблица 6.24.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Чипмейкер	Инструмент для сбора костной ткани при сверлении, оснащенный ограничителем Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Забрать костную ткань
Ограничитель-стоппер	Используется для ограничения глубины при сверлении для забора костной ткани Основной материал: Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК)	Установить на чипмейкер. Вставить чипмейкер в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Забрать костную ткань

Таблица 6.24.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Внешний вид
1.	Чипмейкер	ACM40S	32,7	4,0	
2.	Ограничитель-стоппер	ACMSI40S	17,7	6,5	

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

6.25. Набор для изготовления чипов, артикул NACM45ISETS

Таблица 6.25.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Чипмейкер	Инструмент для сбора костной ткани при сверлении, оснащенный ограничителем Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Забрать костную ткань
Ограничитель-стоппер	Используется для ограничения глубины при сверлении для забора костной ткани Основной материал: Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК)	Установить на чипмейкер. Вставить чипмейкер в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Забрать костную ткань

Таблица 6.25.2. Основные размеры

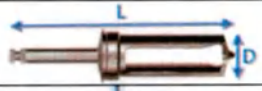
№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Внешний вид
1.	Чипмейкер	ACM45S	32,7	4,5	
2.	Ограничитель-стоппер	ACMSI45S	17,7	7,0	

6.26. Набор для изготовления чипов, артикул NACM50ISETS

Таблица 6.26.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Чипмейкер	Инструмент для сбора костной ткани при сверлении, оснащенный ограничителем Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Забрать костную ткань
Ограничитель-стоппер	Используется для ограничения глубины при сверлении для забора костной ткани Основной материал: Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК)	Установить на чипмейкер. Вставить чипмейкер в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Забрать костную ткань

Таблица 6.26.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Внешний вид
1.	Чипмейкер	ACM50S	32,7	5,0	
2.	Ограничитель-стоппер	ACMSI50S	17,7	7,5	

6.27. Набор для изготовления чипов, артикул NACM60ISETS

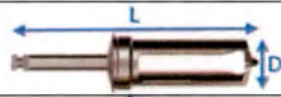
Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

Таблица 6.27.1. Описание, порядок применения

Компонент набора	Описание	Порядок применения
Чипмейкер	Инструмент для сбора костной ткани при сверлении, оснащенный ограничителем Основной материал: Сталь	Вставить фрезу в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Забрать костную ткань
Ограничитель-стоппер	Используется для ограничения глубины при сверлении для забора костной ткани Основной материал: Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК)	Установить на чипмейкер. Вставить чипмейкер в наконечник физиодиспенсера. Установить на кость в зоне операции. Забрать костную ткань

Таблица 6.27.2. Основные размеры

№	Компонент набора	Артикул	Общая длина L, мм	Диаметр рабочей части D, мм	Внешний вид
1.	Чипмейкер	ACM60S	32,7	6,0	
2.	Ограничитель-стоппер	ACMSI60S	17,7	8,5	

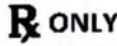
7. Перечень стандартов, которым соответствует медицинское изделие

Директива 93/42/ЕЭС с поправками, внесенными 2007/47/EC; ISO 13485; ISO 9001; EN ISO 14971; EN 1639; EN 1041; ISO 15223-1; EN ISO 10993-5; EN ISO 10993-10; ISO 14644-1; EN ISO 17665-1; ISO 11138-1; ISO 11137-1; ISO 11137-2; ISO 11737-1; EN ISO 17664; ASTM F899-12b; ASTM F702; ASTM F67; ASTM A 276-13; ASTM F136-13; ASTM F2026; ASTM 493; ASTM B308; ASTM F1855; ASTM F2063-05.

Примечание: Стандарты используются в последней редакции: организация сохраняет и обновляет список справочных стандартов как запись собственной системы управления в соответствии с ISO 13485.

8. Расшифровка символов, применяемых в маркировке упаковки

Таблица 8.1. Обозначения и символы

Обозначения и символы			
	Номер по каталогу		Не стерильно
	Размер		Осторожно!
	Код партии		Не использовать при повреждении упаковки
	Дата изготовления		Только по рецепту
	Использовать до		Температурный диапазон
	Изготовитель		Запрет на повторное применение

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

	Не допускать воздействия солнечного света		Радиационная стерилизация
	Обратитесь к инструкции по применению		Не стерилизовать повторно

9. Техническое обслуживание и ремонт

Техническое обслуживание и ремонт не предусмотрены.

10. Очистка, дезинфекция и стерилизация изделия

10.1. Нестерильные изделия

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии в наборах (за исключением изделий чипмейкер и ограничитель-стоппер) предназначены для многократного использования и поставляются в нестерильном виде. В связи с этим перед каждым применением они должны быть тщательно очищены, продезинфицированы и простерилизованы.

Очистка и дезинфекция: После использования незамедлительно промыть и замочить загрязненные инструменты с использованием дезинфицирующего средства, содержащего не менее 70 % спирта.

Стерилизация: После тщательной очистки изделий стерилизовать методом паровой стерилизации при температуре 132 °C в течение минимум 4 минут. Продолжительность сушки: 30 минут.

10.2. Стерильные изделия

Изделия чипмейкер и ограничитель-стоппер поставляются в стерильном виде. Стерилизация проводится гамма-излучением с минимальной дозой 25 кГр для уровня гарантированной стерильности. Стерилизация гамма-излучением представляет собой аутсорсинговый процесс, который контролируется в соответствии с процедурой контроля аутсорсинговых процессов.

11. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации

Условия хранения: хранить в сухом месте без доступа прямых солнечных лучей.

- температура: от 1 до +30 °C
- относительная влажность воздуха: особых требований нет
- атмосферное давление: особых требований нет

Условия транспортировки: Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

- температура: от 1 до +30 °C
- относительная влажность воздуха: особых требований нет
- атмосферное давление: особых требований нет

Условия в помещениях при эксплуатации медицинского изделия

- температура: от 5 до +35 °C
- относительная влажность воздуха: особых требований нет
- атмосферное давление: особых требований нет

12. Срок годности

Срок годности изделий (за исключением изделий чипмейкер и ограничитель-стоппер) не ограничен.

Срок годности изделий чипмейкер и ограничитель-стоппер составляет 5 лет с даты стерилизации/производства.

Инструкция по применению на медицинское изделие:

Инструменты и приспособления Neobiotech для дентальной имплантологии

13. Срок службы

Срок службы (эксплуатации) изделий (за исключением изделий чипмейкер и ограничитель-стоппер) ограничен числом повторных применений: 50 раз.

Чипмейкер ограничен числом повторных применений: 7 раз.

Ограничитель-стоппер предназначен для однократного использования.

14. Утилизация

Медицинские изделия должны утилизироваться в соответствии с медицинскими процедурами, принятыми в медицинских учреждениях, и местными, государственными или федеральными нормативами. Выбор методов безопасной утилизации и уничтожения изделий зависит от мощности и профиля медицинской организации, наличия установок по обеззараживанию/обезвреживанию отходов, способа обезвреживания/уничтожения отходов, принятого на административной территории (сжигание, вывоз на полигоны, утилизация).

Изделия, имеющие контакт с организмом человека, относятся к эпидемиологически опасным отходам (изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, а также изделия, контактирующие с пациентами с инфекционными болезнями). В данном случае медицинская организация осуществляет только сбор и временное хранение вышеуказанных отходов. Сбор осуществляют в пакеты или в контейнеры однократного применения с цветовой маркировкой, принятой для опасных медицинских отходов, в помещении или в местах для временного хранения медицинских отходов до последующего транспортирования к месту уничтожения или утилизации. Инструменты, имеющие контакт с пациентом, подлежат предварительной дезинфекции в установленном порядке перед их утилизацией. Транспортированием использованных медицинских отходов из медицинских учреждений, их утилизацией занимаются специализированные организации, имеющие лицензию на обращение с опасными в эпидемиологическом отношении медицинскими отходами.

Изделия, не имеющие контакт с организмом человека, а также потребительская упаковка, неиспользованные бракованные изделия, изделия с истекшим сроком годности относятся к эпидемиологически безопасным отходам (неопасным отходам, не имеющим контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными), приближенным по составу к твердым бытовым отходам (ТБО). Однако, рекомендуется утилизировать их отдельно как промышленный отход через специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

И&Си Венчер Дрим Тауэр, 3 ком., № 509, 38–21,
Диджитал-ро, 31-гил, Куро-гу, Сеул, Корея
[Форма № 43]

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
«ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС»

(Тел.) 02-6330-8660
(Факс) 02-6330-8680

[Текст документа на английском и корейском языках идентичен]

Регистрационный номер: 2024 – 290

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Чжи Исылъ (Ji Iseul),
поверенный Хео Юнг Ку, генерального директора
«Необайотек Ко., Лтд.»,
лично явившийся ко мне, признал указанную
подпись доверителя на прилагаемой ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА
МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ.

Настоящим засвидетельствовано 8 марта 2024 года в указанной нотариальной конторе.

Наименование нотариальной конторы:
«ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС»

Относится к Прокуратуре южного округа Сеула

Адрес конторы:
И&Си Венчер Дрим Тауэр, 3 ком., № 509, 38–21,
Диджитал-ро, 31-гил, Куро-гу, Сеул, Корея

/подпись/
Подпись нотариуса
Пак, Сан-Хо (Park, Sang-Ho)

[Печать: Нотариальная контора «ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС», нотариус Пак Сан-Хо]
[Печать: Нотариальная контора «ДИ.ЭЛ.ЭС. ПАРТНЕРС», нотариус Пак Сан-Хо]

Настоящая нотариальная контора уполномочена Министром юстиции Республики Корея
предоставлять нотариальные услуги с 7 февраля 2020 года в соответствии с законом № 15150.

210 мм x 297 мм
(Бланк с защитой) (1 категория) 70 г/м²

Перевод данного текста выполнен переводчиком Малошовой Анной Андреевной

Российская Федерация
Город Москва

Двадцать пятого марта две тысячи двадцать четвертого года

Я, Веремий Юлия Игоревна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Малошовой Анны Андреевны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2194-п/77-2024-6-1843

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Ю. И. Веремий

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 145 лист(а)(ов)

Нотариус

