

1. Аппарат для электротерапии DUO 200.
2. Шнур сетевой.
3. Шкала оценки боли.
4. Таблица схем размещения электродов при различных заболеваниях.
5. Кабель для электродов двухпроводный – 2 шт.
6. Фиксатор кабеля для электродов – 4 шт.
7. Замыкатель кабеля для электродов тестовый.
8. Электрод резиновый 4 x 6 см (не более 20 шт.).
9. Электрод резиновый 6 x 8 см (не более 20 шт.).
10. Электрод резиновый 8 x 12 см (не более 20 шт.).
11. Прокладка вязкозная для электрода 4 x 6 см (не более 40 шт.).
12. Прокладка вязкозная для электрода 6 x 8 см (не более 40 шт.).
13. Прокладка вязкозная для электрода 8 x 12 см (не более 40 шт.).
14. Электрод одноразовый самоклеящийся диаметром 3 см (не более 40 шт.).
15. Электрод одноразовый самоклеящийся 2,5 x 5 см (не более 40 шт.).
16. Электрод одноразовый самоклеящийся 5 x 5 см (не более 40 шт.).
17. Электрод одноразовый самоклеящийся 5 x 10 см (не более 40 шт.).
18. Электрод металлический плоский диаметром 15 мм с держателем электрода и вязкозной прокладкой (не более 2 шт.).
19. Прокладка вязкозная для плоского электрода диаметром – 15 мм (не более 30 шт.).
20. Электрод металлический шарообразный (не более 2 шт.).
21. Электрод одноразовый вагинальный (2 кольцевых контакта) (не более 40 шт.).
22. Электрод одноразовый вагинальный (2 кольцевых контакта с разрывом 45 градусов) (не более 40 шт.).
23. Электрод одноразовый вагинальный (3 полусферических контакта) (не более 40 шт.).
24. Электрод одноразовый вагинальный (4 полусферических контакта) (не более 40 шт.).
25. Электрод одноразовый анальный (2 цилиндрических контакта) (не более 40 шт.).
26. Электрод одноразовый анальный (2 плоских контакта) (не более 40 шт.).

- 28.Переходник для электродов с 4 на 2 мм (не более 4 шт.).
- 29.Лента эластичная фиксирующая – 5 х 30 см (не более 20 шт.).
- 30.Лента эластичная фиксирующая – 5 х 60 см (не более 20 шт.).
- 31.Лента эластичная фиксирующая – 5 х 120 см (не более 20 шт.).
- 32.Тележка аппаратная с 2-мя полками и 1 ящиком для принадлежностей.
- 33.Полка дополнительная для аппаратной тележки.
- 34.Ящик дополнительный для аппаратной тележки.
- 35.Держатель принадлежностей.
- 36.Сумка транспортировочная.

Исполнительный директор ООО «Группа АСВОМЕД»

(должность)

Устенко В.В.

(подпись и печать Заявителя)

(И.О.Фамилия)

от имени Общества с ограниченной ответственностью «Группа АСВОМЕД» (ООО «Группа АСВОМЕД»)

(наименование организации-заявителя)




Рис 1. Аппарат для электротерапии DUO 200.



Рис 2. Шнур сетевой.

GymnaUniphy
YOUR PHYSIO COMPANY

MAXIMAL PAIN

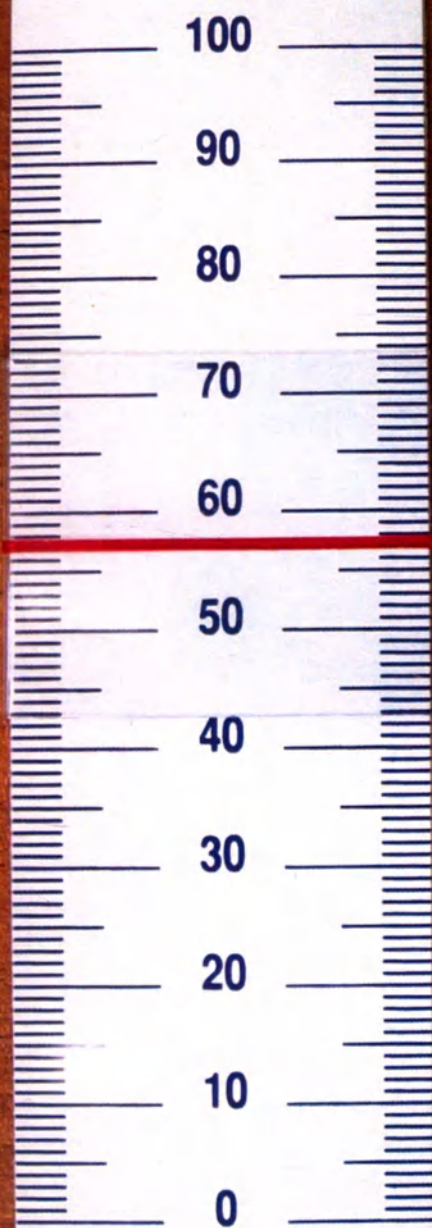

NO PAIN AT ALL

VAS

EVA

Visual Analogue Scale

Echelle Visuelle Analogique

www.gymna-uniphy.com

Рис 3. Шкала оценки боли.



Рис 4. Таблица схем размещения электродов при различных заболеваниях.



Рис 5. Кабель для электродов двухпроводный



Рис 6. Фиксатор кабеля для электродов



Рис 7. Замыкатель кабеля для электродов тестовый.



Рис 8. Электрод резиновый 4 x 6 см.

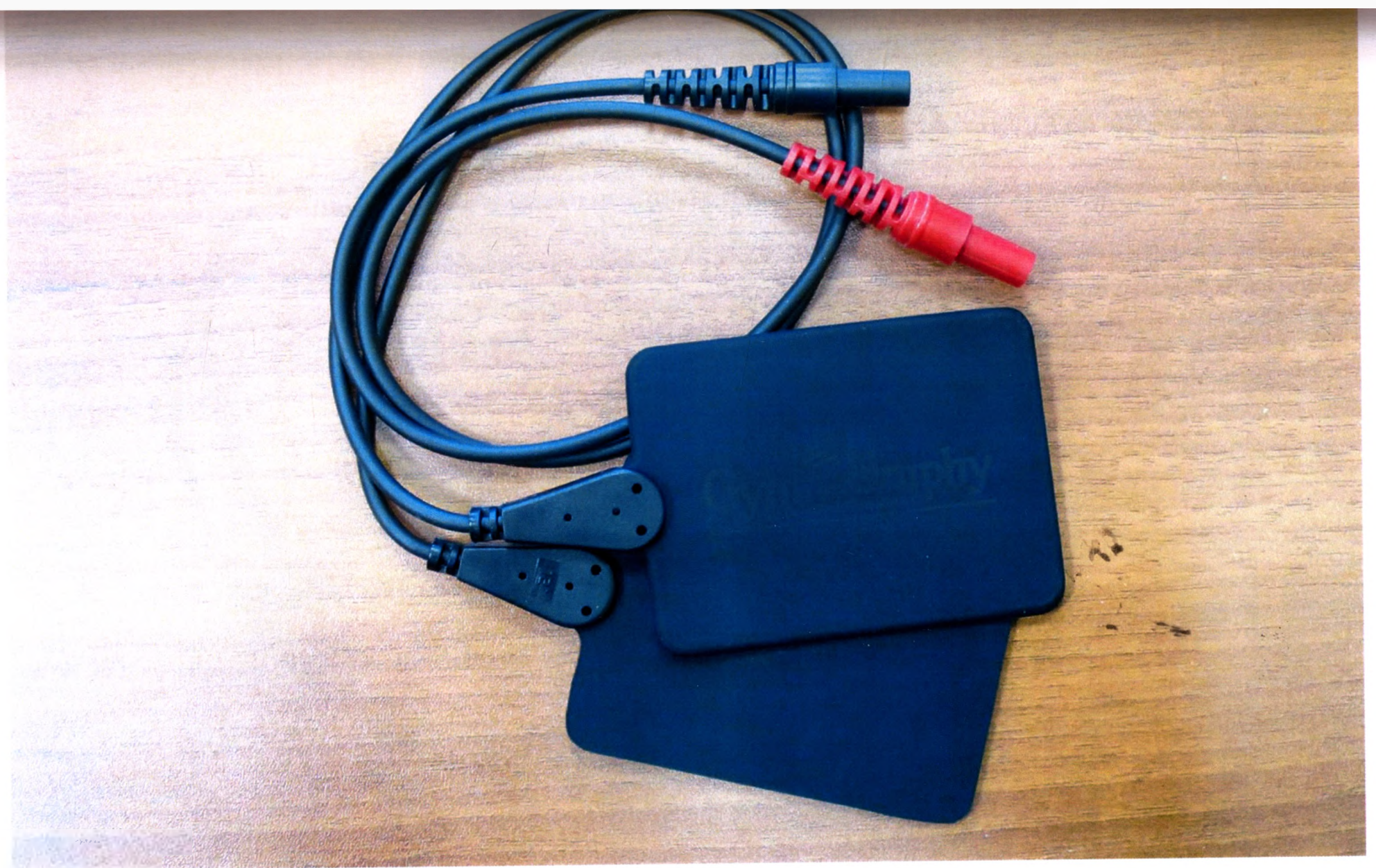


Рис 9. Электрод резиновый 6 x 8 см.

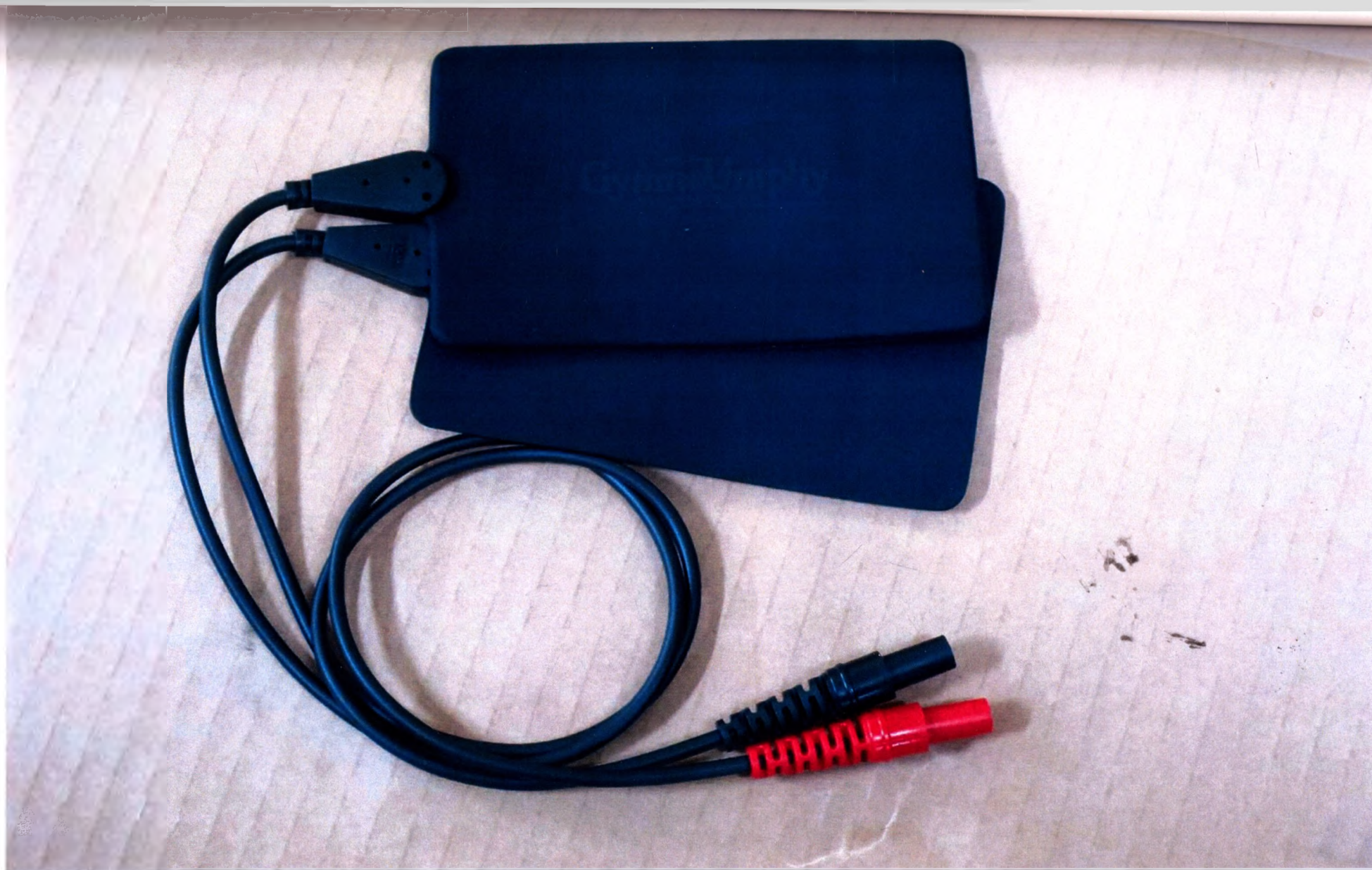


Рис 10. Электрод резиновый 8 x 12 см.

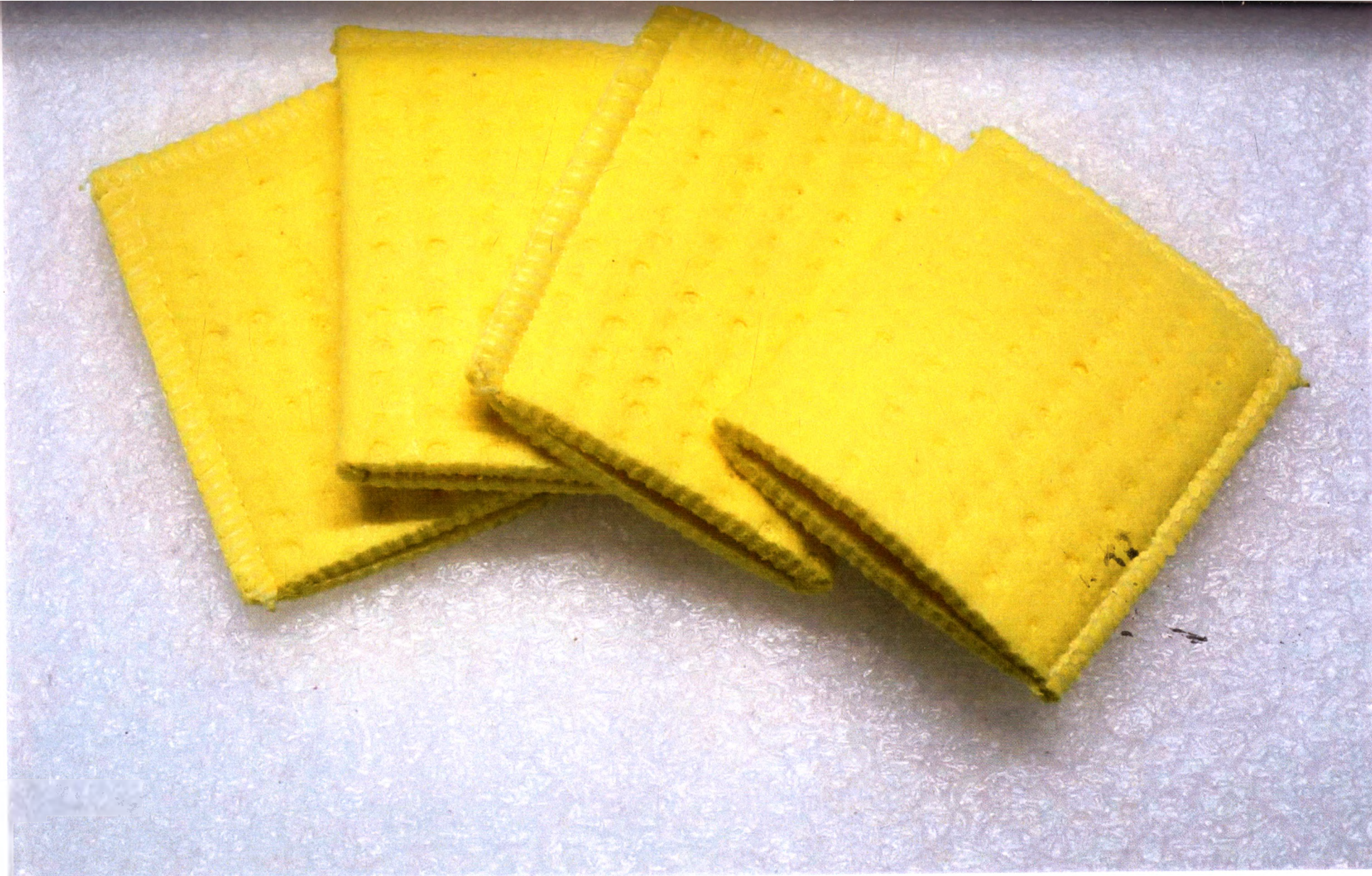


Рис 11. Прокладка вискозная для электрода 4 x 6 см.



Рис 12. Прокладка вискозная для электрода 6 x 8 см.

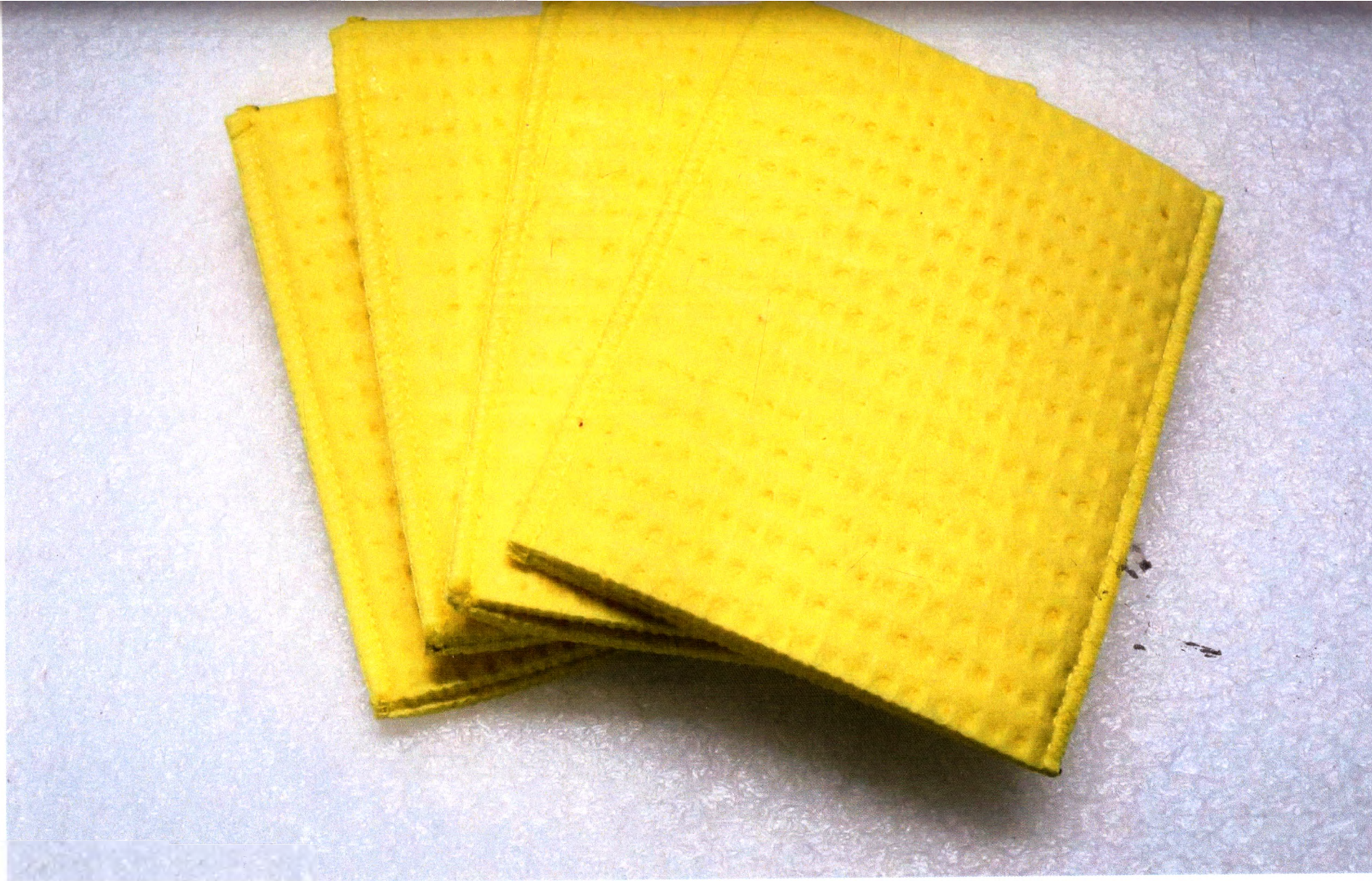


Рис 13. Прокладка вискозная для электрода 8 x 12 см.

Self-adhesive electrodes

APPLICATION

1. Clean the skin thoroughly at the prescribed location and dry carefully to remove lotion, oil and make-up. Fig. 1
2. Connect the electrodes to the cables. Fig. 2
3. Remove the electrode by lifting at the edge. Fig. 3, 4
4. Place the electrode on the surface to treat.
5. Turn the stimulator on and follow the instruction of use from the manufacturer and/or the practitioners.
6. After use, turn the stimulator off and replace the electrodes on the siliconed plastic film.

MAINTENANCE

1. For an optimal adhesion, clean the gel surface after each use. Apply a drop of water and keep drying for a few seconds. Replace the electrodes on the plastic film. Fig. 5
2. The life time of the electrode depends on the maintenance, the skin conditions and the type of treatment. Keep at ambient temperature in original packing. Fig. 6

IMPORTANT

1. Do not connect the electrodes while driving a vehicle, or operating machinery.
2. Do not apply on wounds.
3. If skin irritation occurs, discontinue use.
4. Remove the electrodes before bathing.
5. The electrodes are intended for single use.



Рис 14. Электрод одноразовый самоклеящийся диаметром 3 см.

Self-adhesive electrodes

APPLICATION

- 1 Clean the skin thoroughly at the prescribed location and dry carefully to remove lotion, oil and make-up. Fig. 1
- 2 Connect the electrodes to the cables. Fig. 2
- 3 Remove the electrode by lifting at the edge. Fig. 3, 4
- 4 Place the electrode on the surface to treat.
- 5 Turn the stimulator on and follow the instruction of use from the manufacturer and/or the practitioners.
- 6 After use, turn the stimulator off and replace the electrodes on the siliconed plastic film.

MAINTENANCE

- 1 For an optimal adhesion, clean the gel surface after each use. Apply a drop of water and keep drying for a few seconds. Replace the electrodes on the plastic film. Fig. 5
- 2 The life time of the electrode depends on the maintenance, the skin conditions and the type of treatment. Keep at ambient temperature in original packing. Fig. 6

IMPORTANT

- 1 Do not connect the electrodes while driving a motorised vehicle, or operating machinery.
- 2 Do not apply on wounds.
- 3 If skin irritation occurs, discontinue use and contact your physician.
- 4 Remove the electrodes before bathing and swimming.
- 5 The electrodes are intended for single patient use only.

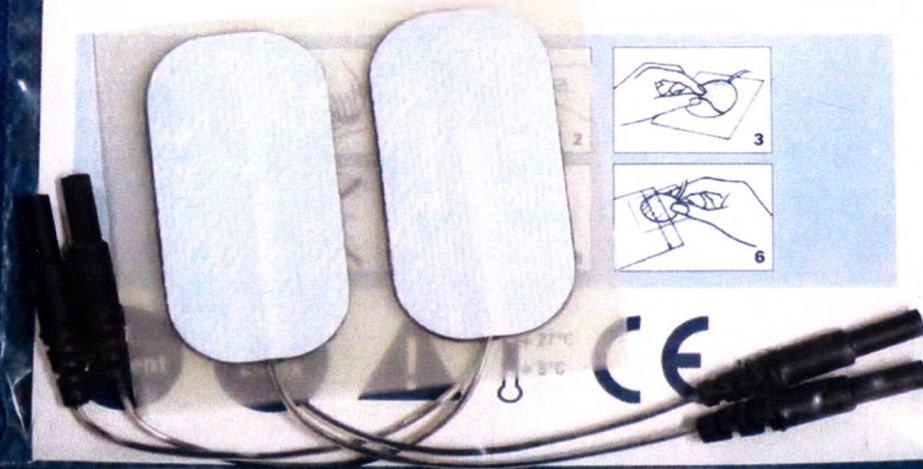


Рис 15. Электрод одноразовый самоклеящийся 2,5 x 5 см.

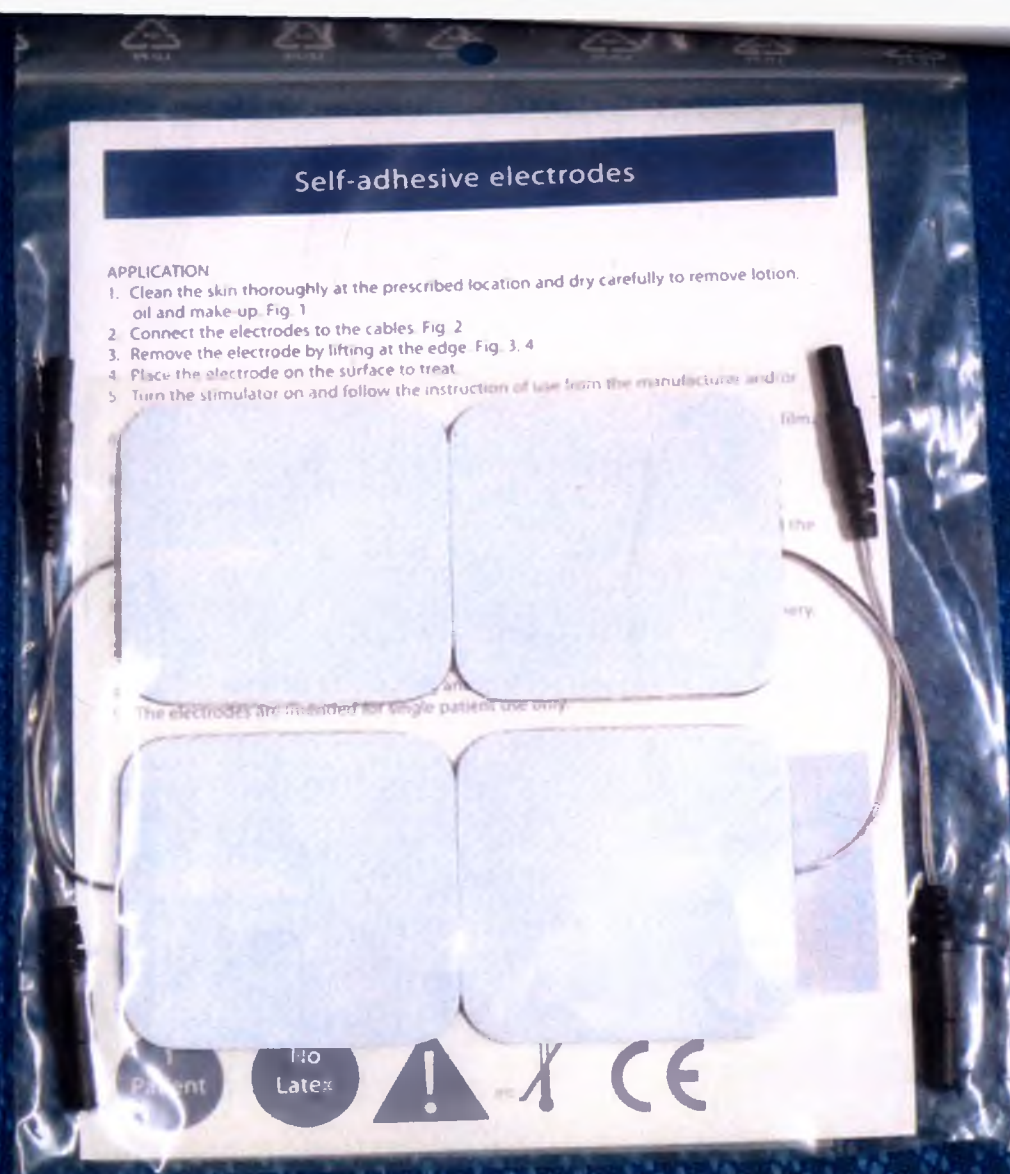


Рис 16. Электрод одноразовый самоклеящийся 5 x 5 см



Рис 17. Электрод одноразовый самоклеящийся 5 x 10 см





Рис 19. Прокладка вязкозная для плоского электрода диаметром – 15 мм.

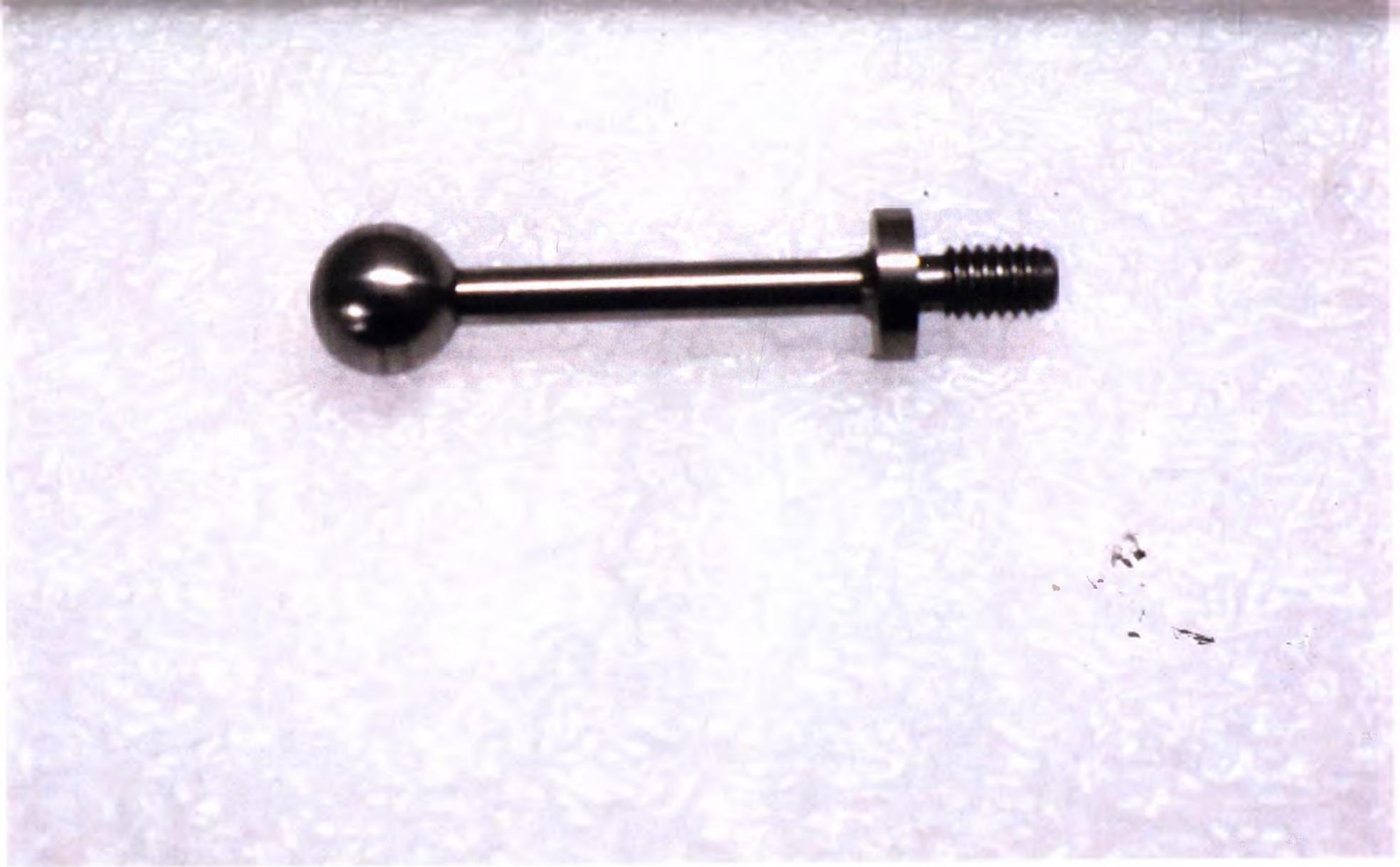


Рис 20. Электрод металлический шарообразный.



Рис 21. Электрод одноразовый вагинальный (2 кольцевых контакта).



Рис 22. Электрод одноразовый вагинальный (2 кольцевых контакта с разрывом 45 градусов).

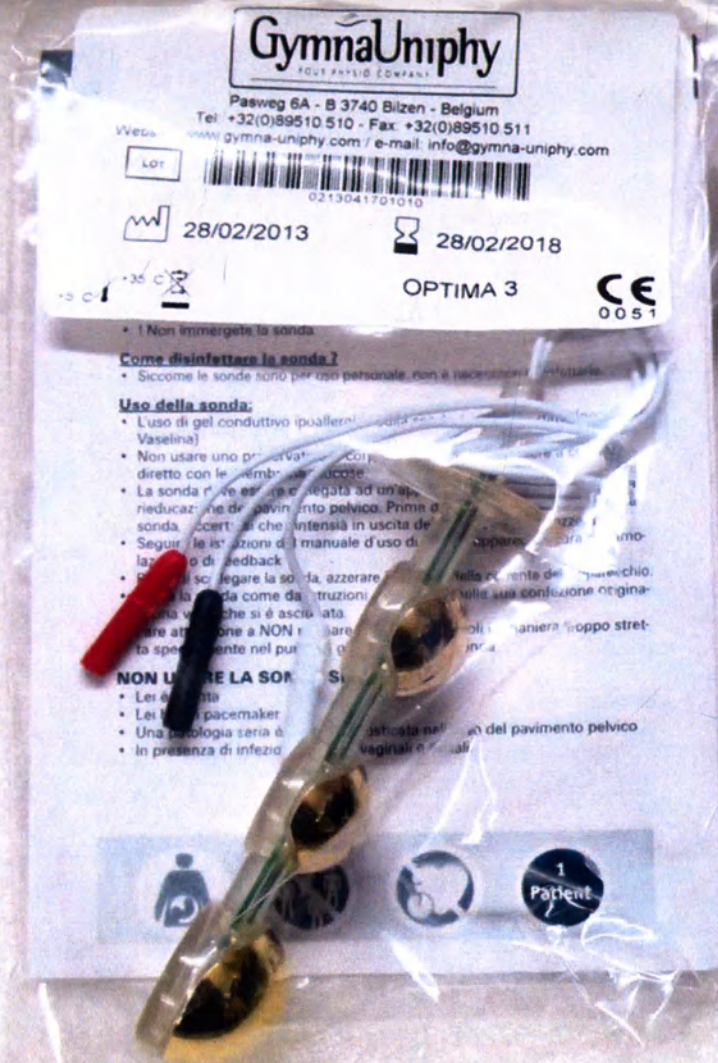




Рис 24. Электрод одноразовый вагинальный (4 полусферических контакта).



Рис 25. Электрод одноразовый анальный (2 цилиндрических контакта).



Рис 26. Электрод одноразовый анальный (2 плоских контакта).



Рис 27. Электрод ректальный.



Рис 28. Переходник для электродов с 4 на 2 мм.



Рис 29. Лента эластичная фиксирующая – 5 х 30 см.



Рис 30. Лента эластичная фиксирующая – 5 x 60 см.

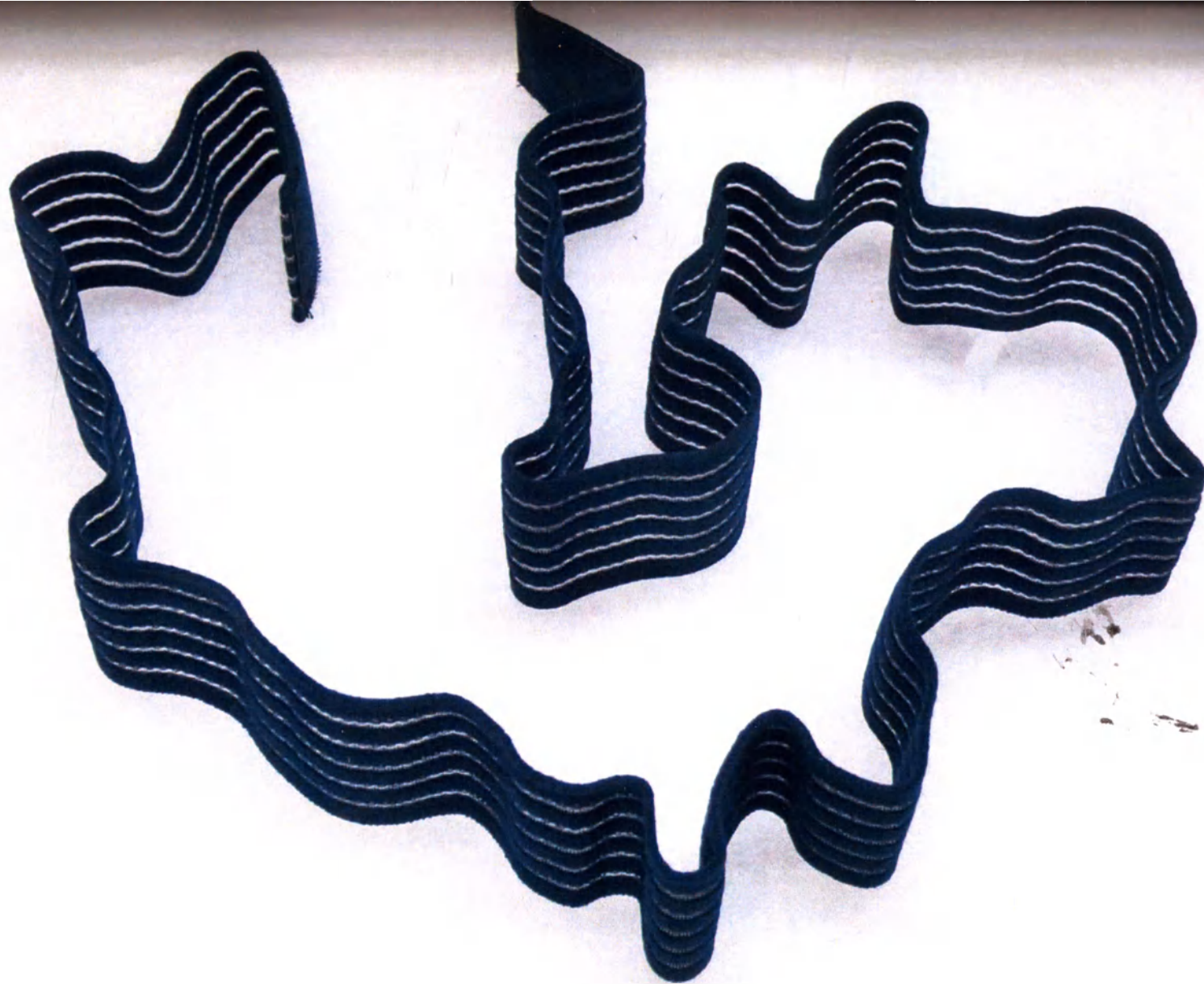


Рис 31. Лента эластичная фиксирующая – 5 x 120 см.




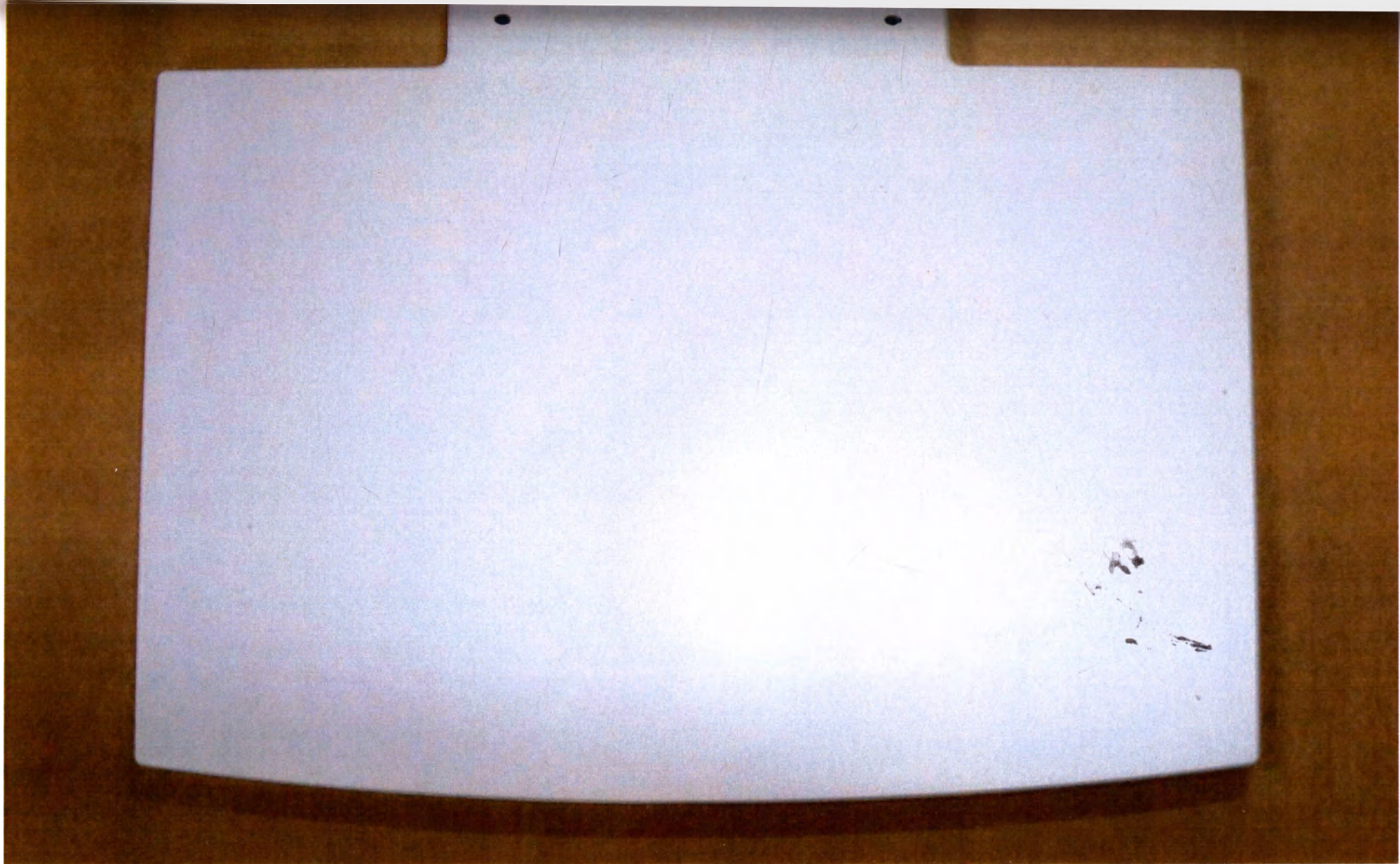


Рис 33. Полка дополнительная для аппаратной тележки.



Рис 34. Ящик дополнительный для аппаратной тележки.

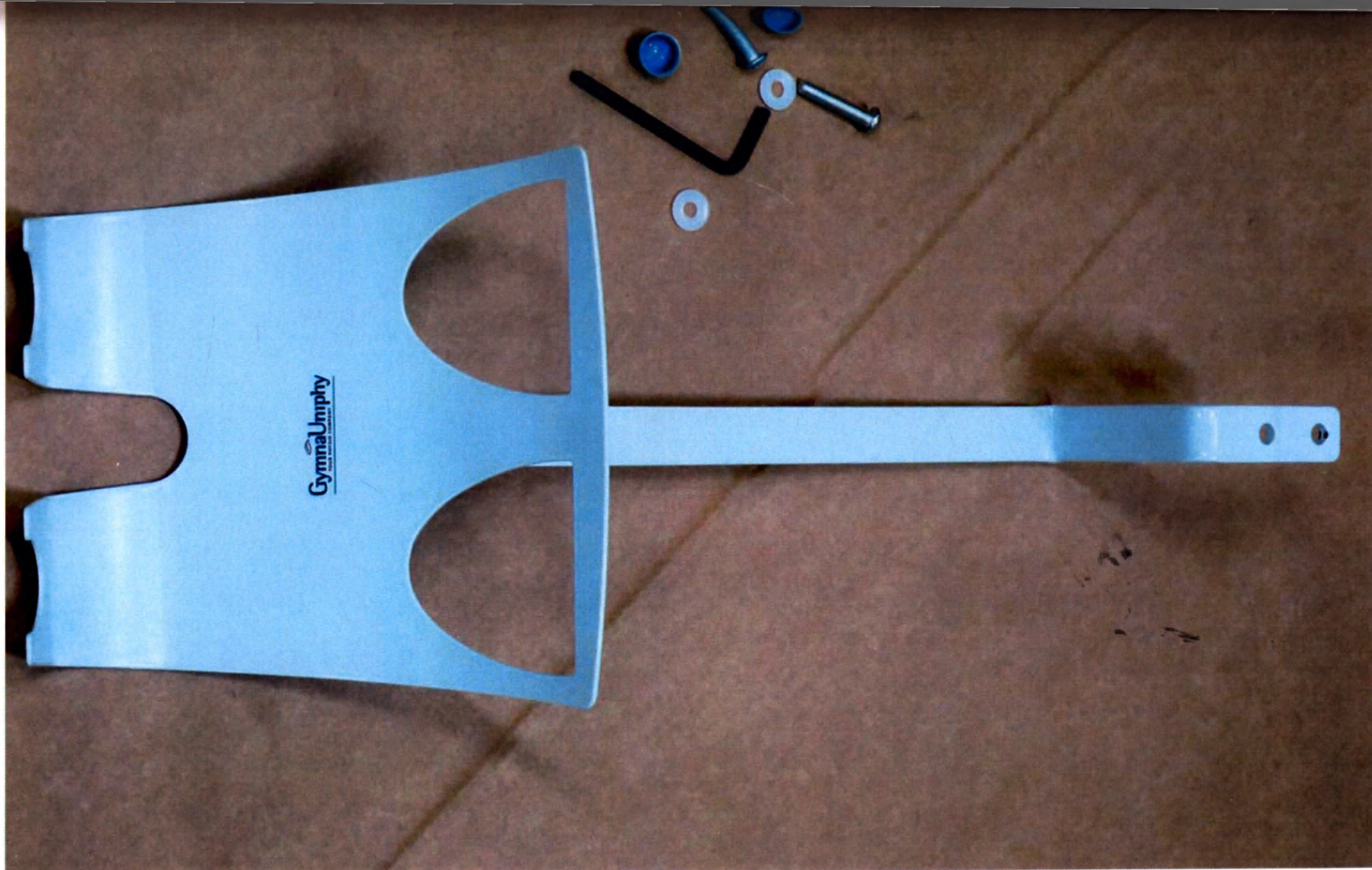

35. Держатель принадлежностей.



Рис 36. Сумка транспортировочная.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

38 лист(ов)

Генеральный директор ООО "Группа
"АСВОМЕД"

Чиняев А.В.

