

Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения аутоантител класса IgG к
тиреоглобулину иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-ТГ Контрольные материалы (Alinity i Anti-Tg Controls)»**



09P3410



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения аутоантител класса IgG к тиреоглобулину иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«Анти-ТГ Контрольные материалы (Alinity i Anti-Tg Controls)».

В составе: Контроль «-» (Alinity i Anti-Tg Control -) – 1 флакон х 4,0 мл; Контроль «+» (Alinity i Anti-Tg Control +) – 1 флакон х 4,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Abbott Ireland Diagnostics Division, Finisklin Business Park Sligo, Ireland (Ирландия) / РУ № _____ / _____ от ____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Маркировка МИ Анти-ТГ Контрольные материалы (Alinity i Anti-Tg Controls)

09P3410



01476d60



125171


Anti-Tg Ctrl

Alinity i Anti-Tg Controls



Anti-Tg Ctrl

	CONC	RANGE
	IU/mL	IU/mL
CONTROL -	1 x 4.0 mL 0.5	≤ 2.15
CONTROL +	1 x 4.0 mL 150	90 - 210

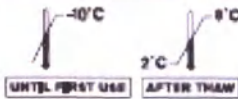


Abbott Ireland Diagnostics Division
Finisklin Business Park
Sligo
Ireland
+353 (0) 91 517112



PRODUCED FOR ABBOTT BY
Abbott Diagnostics
A Div. of Abbott Scientific Company LLC
A Part of Abbott Scientific, Inc.
1385 Valley Pike
Burlington, MA 01803, USA
PRODUCT OF USA

Anti-Tg Ctrl

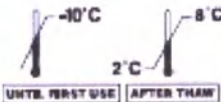

Маркировка компонентов медицинского изделия

- Контроль «-» (Alinity i Anti-Tg Control -)



UNTIL FIRST USE

AFTER THAW



ABBOTT

Alinity i

Anti-Tg

CONTROL -



Exp.

CN

09P34L

4.0 mL

0.5 IU/mL

G90654R01

- Контроль «+» (Alinity i Anti-Tg Control +)



UNTIL FIRST USE

AFTER THAW



ABBOTT

Alinity i

Anti-Tg

CONTROL +



Exp.

CN

09P34M

4.0 mL

150 IU/mL

G90655R01

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью


3 листов



**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения аутоантител класса IgG к
тиреоглобулину иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и
плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«Анти-ТГ Контрольные материалы (Alinity i Anti-Tg Controls)»**

φωτογραφιστικός υπογραμμιστής (απεικονίζει την εικόνα και τον αριθμό των γραμμών που θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία της εικόνας).

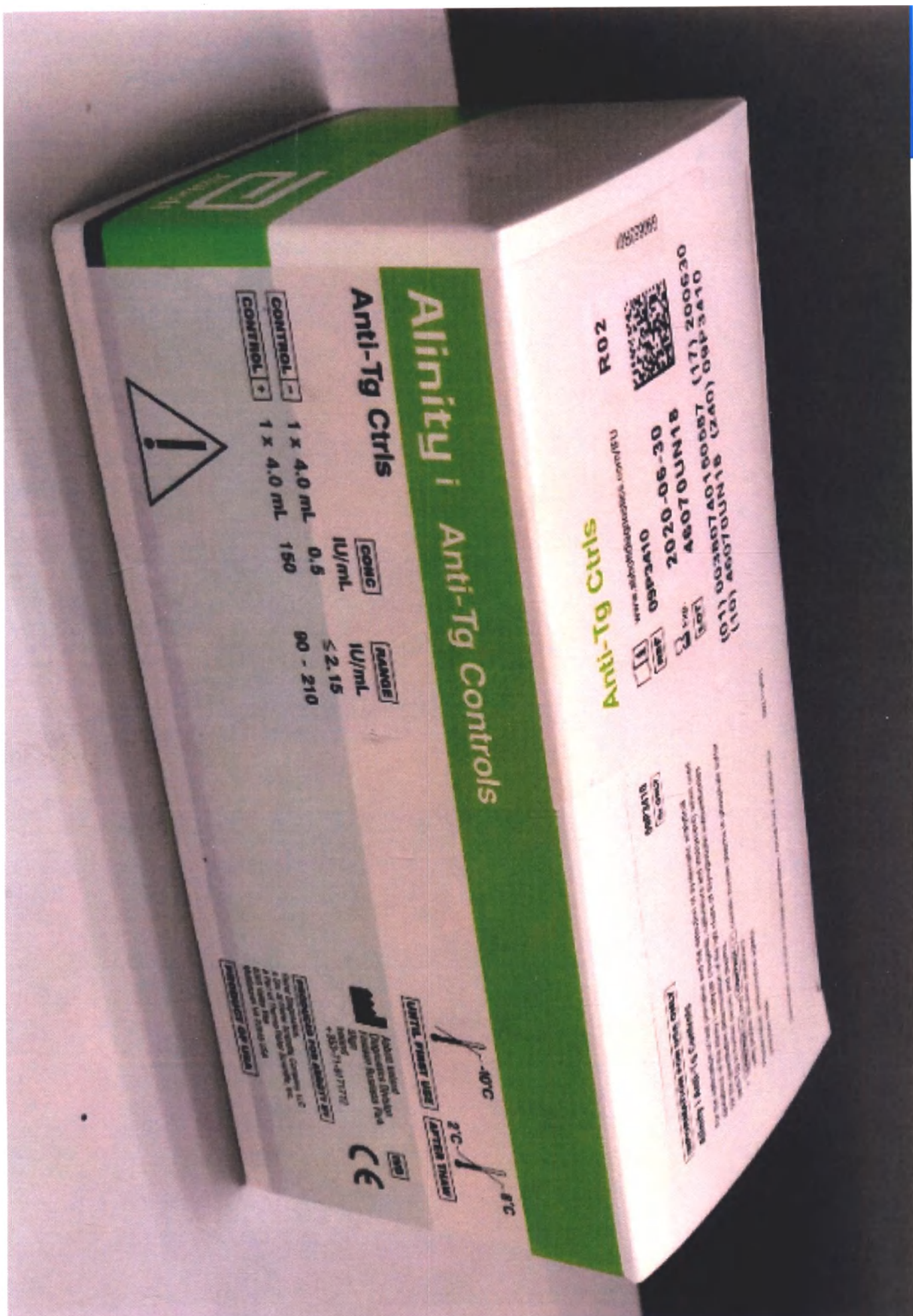





Alinity i Anti-Tg Controls

Read Highlighted Changes: Revised March 2018.


NAME

Alinity i Anti-Tg Controls (also referred to as Anti-Tg Ctrls)

INTENDED USE

The Alinity i Anti-Tg Controls are for the estimation of test precision and the detection of systematic analytical deviations of the Alinity i analyzer (reagents, calibrators and instrument) when used for the quantitative determination of the IgG class of thyroglobulin autoantibodies (anti-Tg) in human serum and plasma.

For additional information, refer to the Alinity i Anti-Tg reagent package insert and the Alinity i-series Operations Manual.

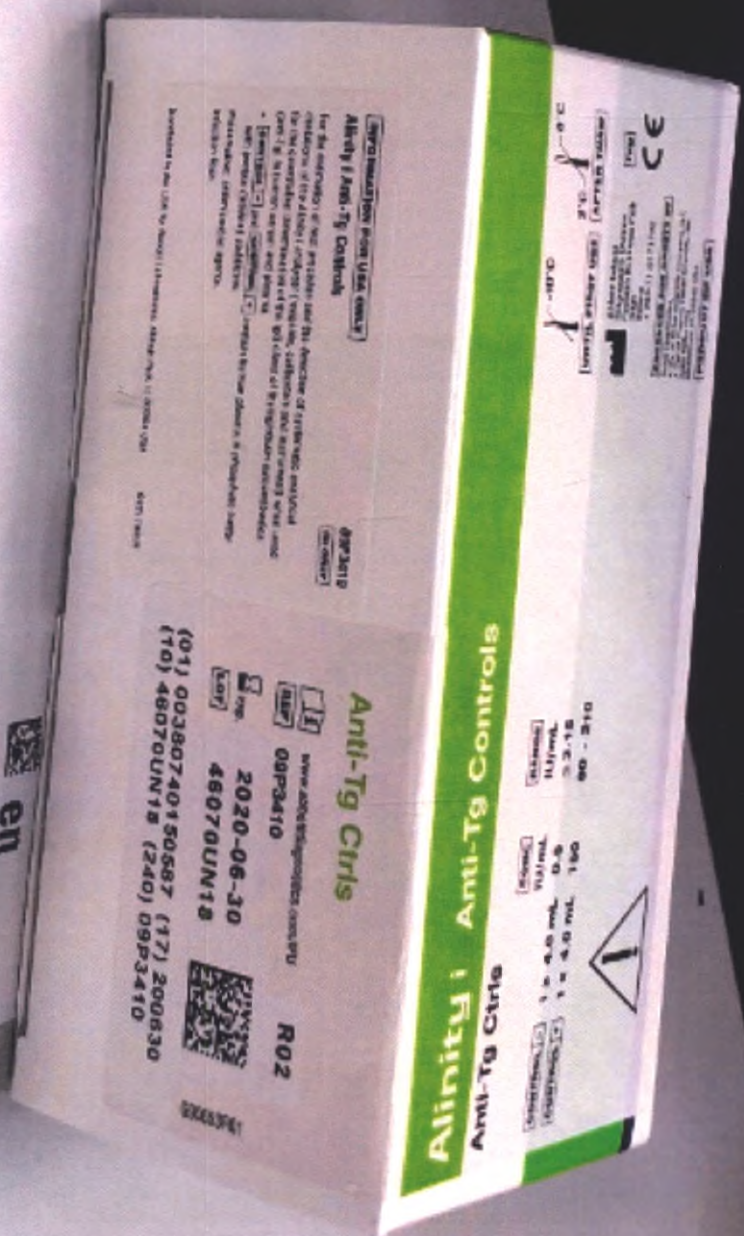

Anti-Tg Ctrls

Lot: 00380740150587 (17) 200630
(10) 48070UN18 (240) 09P3410

en
Anti-Tg
G80652R02
C9P340



For a detailed discussion of safety precautions during system operation, refer to the Alinity i-series Operations Manual, Section B.

PREPARATION FOR USE

- Thaw completely at room temperature (15 to 30°C) for 45 to 60 minutes.

STORAGE

- Prior to use, mix thoroughly by gentle inversion (5 to 10 times).
- This product is shipped on dry ice.
- Self-detecting freezers are recommended.

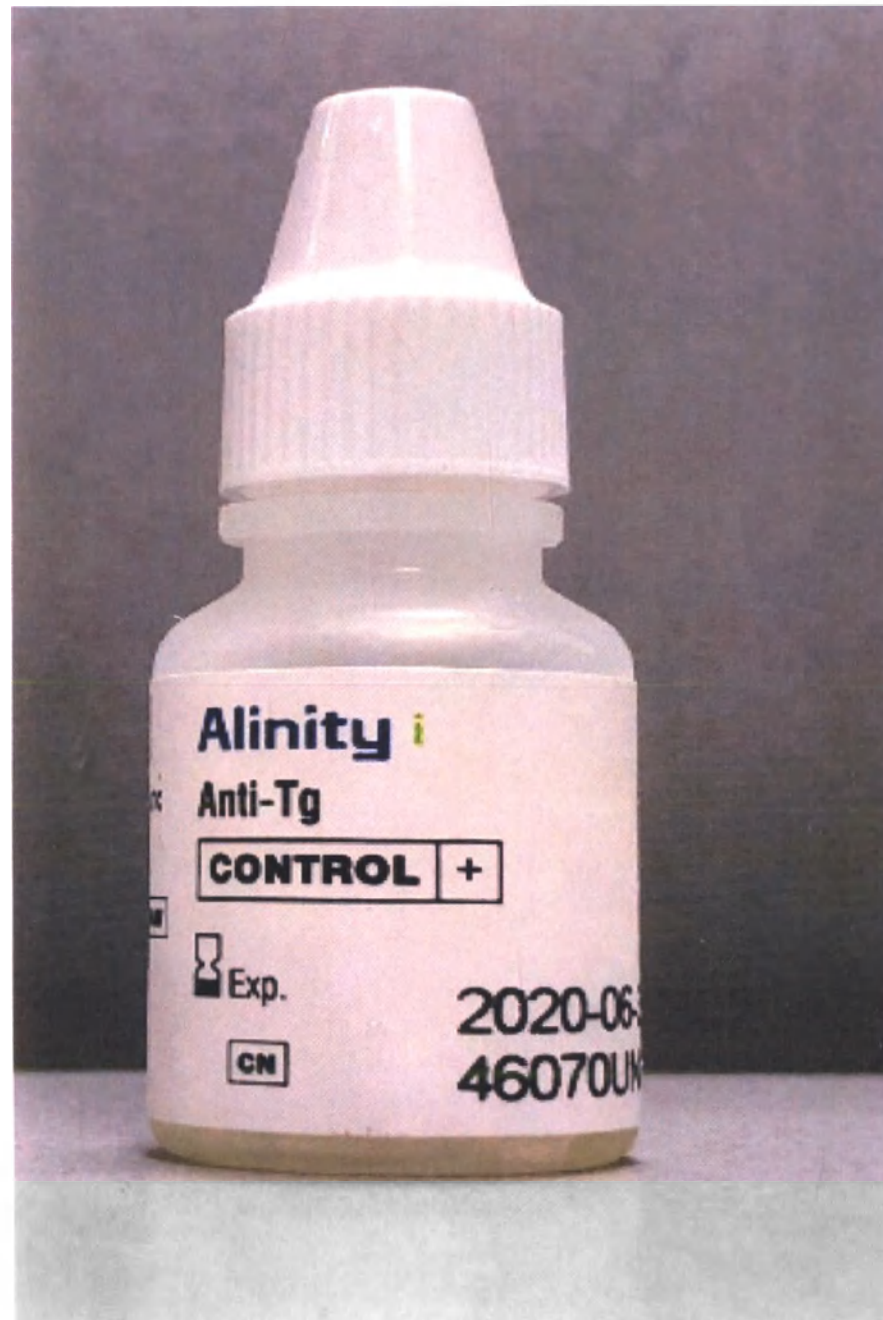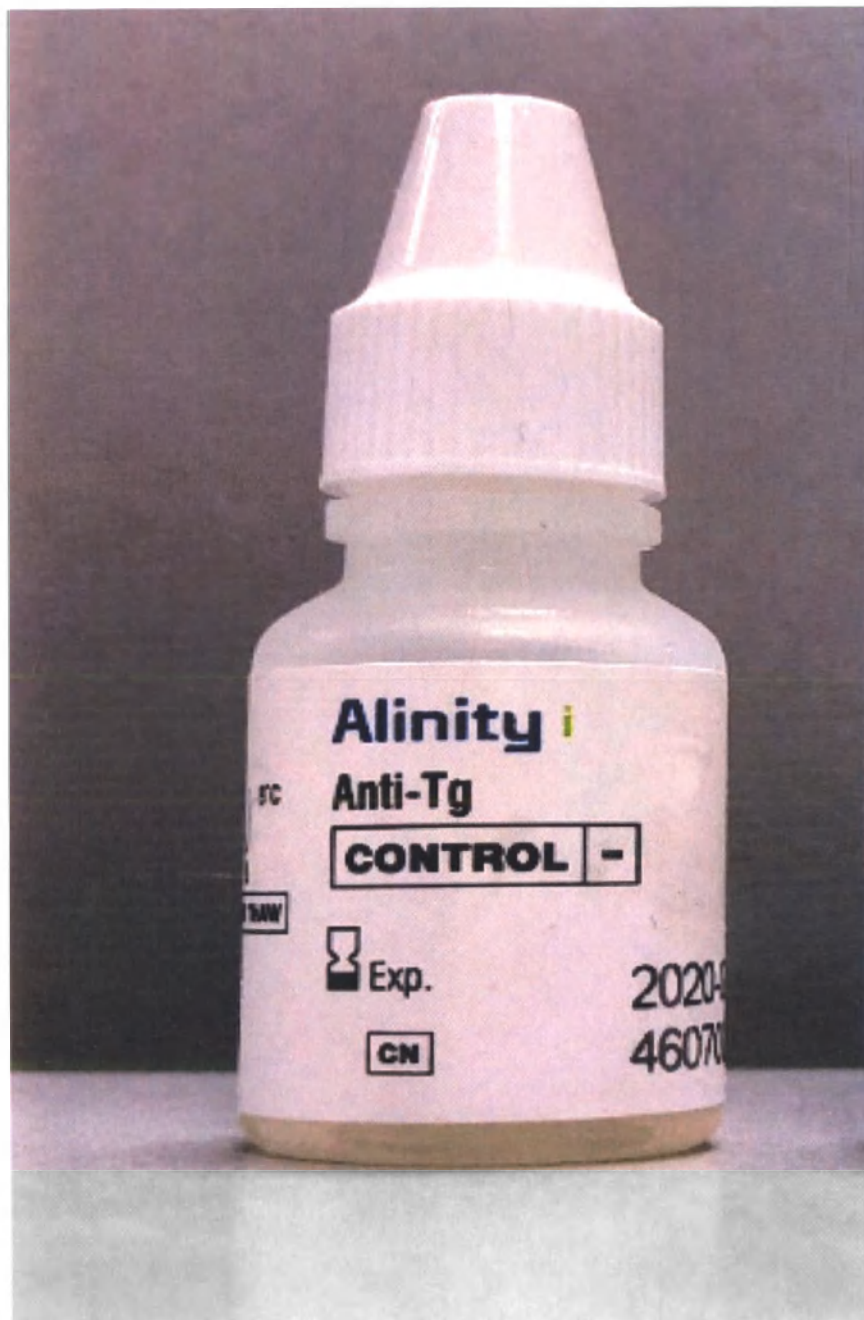

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

