

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «МЕДМЭЛ»



Н.Г. Ломидзе
2002 г.

ТЕЛЕЖКИ БОЛЬНИЧНЫЕ

ТПБ-01-«МЕДМЭЛ»

ТПГ-01-«МЕДМЭЛ»

ПАСПОРТ

ГАБР.942819.002 ПС

Срок действия с
до



КОПИЯ
ВЕРНА

Ген. директор
ЗАО МЕДМЭЛ
Ломидзе Н.Г.

2002

Подп. и дата

взаим. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лист

1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	3
4. Технические характеристики.....	5
5. Транспортирование и хранение.....	5
6. Свидетельство о приемке.....	6
7. Свидетельство об упаковке.....	6
8. Гарантии поставщика.....	7
9. Сведения о рекламациях	8

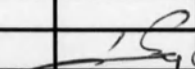					ГАБР.942819.001 ПС					
	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Тележки больничные ТПБ-01-«МЕДМЭЛ» ТПГ-01-«МЕДМЭЛ»		Лит.	Лист	Листов	
Разработал									2	8
Проверил										
Нач. отдела										
Н. контроль										
Утвердил	Ломидзе			20.05.02	Паспорт					

Ф2. 106-5

Копировал

Формат А4

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние тележек больничных ТПБ-01-«МЕДМЭЛ», ТПГ-01-«МЕДМЭЛ» зав. № _____.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Тележки выпускаются в двух модификациях ТПБ-01-«МЕДМЭЛ», ТПГ-01-«МЕДМЭЛ»
- 2.2 Тележки предназначены для транспортировки питания больным, пищевых отходов, хозяйственного инвентаря, белья, а так же медицинских приборов и лекарственных препаратов.
- 2.3 Тележка ТПБ-01-«МЕДМЭЛ» имеет две корзины из металлической сетки с высотой борта 170 мм, которые расположены в два яруса на несущей раме. Тележка имеет четыре колесные опоры Ø 125 мм, две из которых имеют тормозное устройство.
- 2.4 Тележка ТПГ-01-«МЕДМЭЛ» представляет собой цельносварную раму с платформой, установленную на четыре колесные опоры Ø 200 мм, две из которых имеют тормозное устройство. Одно боковое ограждение съемное.
- 2.5 Тележки имеют полимерное покрытие белого цвета.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 Комплект поставки тележки должен соответствовать указанному в таблицах 1,2

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1. Тележка больничная ТПБ-01-«МЕДМЭЛ»	ГАБР.942819.002	1
2. Паспорт	ГАБР.942819.002 ПС	1

					ГАБР.942819.002 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4


Таблица 2

Наименование	Обозначение	Кол-во, шт.
1. Тележка больничная ТПГ-01-«МЕДМЭЛ»	ГАБР.942819.002-01	1
2. Паспорт	ГАБР.942819.002-01 ПС	1

Представитель ОТК _____
Подпись, дата



ТПБ-01-«МЕДМЭЛ»

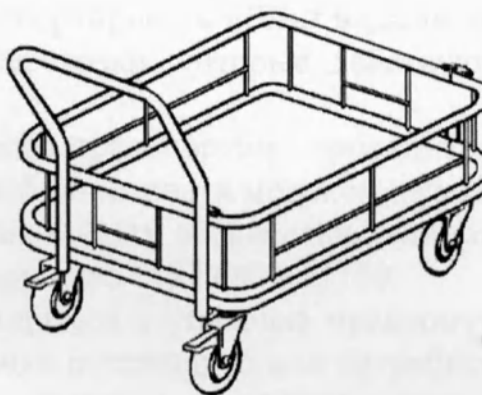

ТПБ-01-«МЕДМЭЛ»

					ГАБР.942819.002 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Габаритные размеры тележки ТПБ-01-«МЕДМЭЛ» длина – 900, ширина-550, высота – 920.
- 4.2 Габаритные размеры тележки ТПГ-01-«МЕДМЭЛ» лина-1100, ширина-700, высота – 900.
- 4.3 Масса тележки ТПБ-01-«МЕДМЭЛ» - 17,5 кг,
- 4.4 Масса тележки ТПГ-01-«МЕДМЭЛ»-40,0 кг,
- 4.5 Диаметр колес ТПБ-01-«МЕДМЭЛ»-125 мм,
- 4.6 Диаметр колес ТПГ-01-«МЕДМЭЛ»-200 мм.
- 4.7 Тележки выдерживают равномерно-распределенную нагрузку:
ТПБ-01-«МЕДМЭЛ»-75± 5 кг
ТПГ-01-«МЕДМЭЛ»-200± 5 кг

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1 Тележки допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.
- 5.2 Транспортирование морским транспортом проводится в соответствии с действующими правилами безопасности морской перевозки грузов.
- 5.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
- 5.4 Хранение должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключаящих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

					ГАБР.942819.002 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележку больничную ТПБ-01-«МЕДМЭЛ», ТПГ-01-«МЕДМЭЛ»
Зав. № _____ признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

подпись представителя ОТК

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Тележку больничную ТПБ-01-«МЕДМЭЛ», ТПГ-01-«МЕДМЭЛ»
Зав. № _____ упакована на предприятии _____

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
Подпись

М.П.

Тележку больничную ТПБ-01-«МЕДМЭЛ», ТПГ-01-«МЕДМЭЛ»
После упаковки принял _____
Подпись

					ГАБР.942819.002 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а Копировал Формат А4

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тележки транспортной медицинской требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода тележки в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки ее с предприятия-изготовителя.
- 8.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в изделие.

					ГАБР.942819.002 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 В случае возникновения поломок изделий, входящих в состав тележки, в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».

АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание тележки.

9.2 Гарантийное обслуживание тележки производит предприятие «МЕДМЭЛ», расположенное по адресу:

г. Москва, 2-ой Амбулаторный проезд, 8 стр.3

Тел./факс: (095) 152-17-46, (095) 152-19-84

9.3 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 3.

Таблица 3

Дата	Номер рекламационного акта	Краткое содержание Рекламационного акта	Меры, принятые по рекламации

					ГАБР.942819.002 ПС	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью

на 8 листах

Генеральный директор ЗАО «МЕДМЭЛ»

Ломидзе Н.Г.

