

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
«МЕДМЭЛ»

Н.Г. Ломидзе

2002 г.

СТОЛИКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ, ПРОЦЕДУРНЫЕ

СИп-01-«МЕДМЭЛ», СИп2-01-«МЕДМЭЛ», СПп2-01-«МЕДМЭЛ»

ПАСПОРТ

ГАБР.942819.003 ПС



КОПИЯ
ВЕРНА

Ген. директор
«МЕДМЭЛ»

Н.Г. Ломидзе

2002г.

Подп. и дата

взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии	3
3. Комплектность	4
4. Технические характеристики	5
5. Свидетельство о приемке	6
6. Свидетельство об упаковке	6
7. Транспортирование и хранение	7
8. Гарантии изготовителя	8
9. Сведения о рекламациях	9

					ГАБР.942819.003 ПС				
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Столики инструментальные, процедурные Сип-01-«МЕДМЭЛ», Сип2-01- «МЕДМЭЛ», СПн2-01-«МЕДМЭЛ» Паспорт	Лит.	Лист	Листов	
Разработал		Сотников И.В.	<i>Сотников</i>	20.05.02					
Проверил		Ушаков А.В.	<i>Ушаков</i>	20.06.02			2	9	
Н. контроль									
Утвердил		Ломидзе	<i>Ломидзе</i>	20.08.02					

Ф2. 106-5

Копировал

Формат А4

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед началом работы следует изучить паспорт на столик инструментальный, процедурный (СИп1-01-«МЕДМЭЛ», СИп2-01-«МЕДМЭЛ», СПп-01-«МЕДМЭЛ») ГАБР.942819.003.

1.2 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние столика инструментального, процедурного СИп1-01-«МЕДМЭЛ», СИп2-01-«МЕДМЭЛ», СПп-01-«МЕДМЭЛ» зав. № _____

1.3 Все записи должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Столики инструментальные, процедурные предназначены для оборудования лечебных, процедурных, косметических и гигиенических кабинетов, а так же используются для оснащения поликлиник, клиник, больниц и других учреждений практического и профилактического здравоохранения.

2.2 Столик инструментальный на металлическом каркасе с одной полкой из нержавеющей стали, передвижной СИп1-01-«МЕДМЭЛ».

2.3 Столик инструментальный на металлическом каркасе с двумя полками из нержавеющей стали, подвижный СИп2-01-«МЕДМЭЛ».

2.4 Столик инструментальный на металлическом каркасе с двумя полками из нержавеющей стали и выдвижной ящиком СПп2-01-«МЕДМЭЛ».

2.5 Ящик изготавливается из нержавеющей стали.

2.6 Каркасы столов покрыты эпоксидным покрытием белого цвета.

2.7 Столики имеют колесные опоры диаметром 75мм, и два из них с тормозом.

					ГАБР.942819.003 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докумен- та	Подпись	Дата		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность столика процедурно-манипуляционного приведена в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1

Изделия входящие в комплект	Обозначение документа	Кол-во, шт
Столик инструментальный СИп1-01-«МЕДМЭЛ»	ГАБР.942819.003	1
Полка металлическая		1
Паспорт	ГАБР.942819.003 ПС	1

Таблица 2

Изделия входящие в комплект	Обозначение документа	Кол-во, шт
Столик процедурный СПп1-01-«МЕДМЭЛ»	ГАБР.942819.003-02	1
Полка металлическая		1
Ящик		1
Паспорт	ГАБР.942819.003 ПС	1

Таблица 3

Изделия входящие в комплект	Обозначение документа	Кол-во, шт
Столик инструментальный СИп2-01-«МЕДМЭЛ»	ГАБР.942819.003-01	1
Полка металлическая		2
Паспорт	ГАБР.942819.003 ПС	1

Представитель ОТК _____
Подпись, дата

					ГАБР.942819.003 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докумен-та	Подпись	Дата		

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Габаритные размеры столиков, мм, не более: длина – 560, ширина – 430, высота – 780.

4.2 Масса, кг, не более СИп1-01-«МЕДМЭЛ» - 12, СИп2-01-«МЕДМЭЛ» – 14, СПп2-01-«МЕДМЭЛ» – 16.

4.3 Столик СИп1-01-«МЕДМЭЛ» состоит из одного яруса с металлической полкой.

4.4 Столик СИп2-01-«МЕДМЭЛ» состоит из двух ярусов металлических полок.


4.5 Столик СПп2-01-«МЕДМЭЛ» состоит из двух ярусов, верхний имеет полку и выдвижной ящик, а нижний металлическую полку.

4.6 Допустимая нагрузка на металлический полку не более 10 кг.

4.7 Диаметр колес – 75 мм.

4.8 Столики СИМ устойчивы на горизонтальной плоскости. Зазор между полом и одним из колес должен быть не более 3 мм.


4.9 Столики изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150.

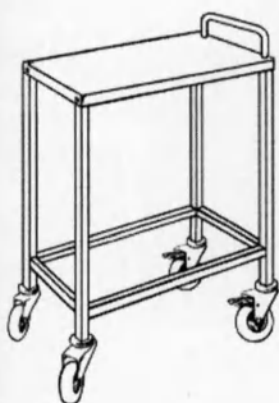

СИп1-01-«МЕДМЭЛ»



СИп2-01-«МЕДМЭЛ»

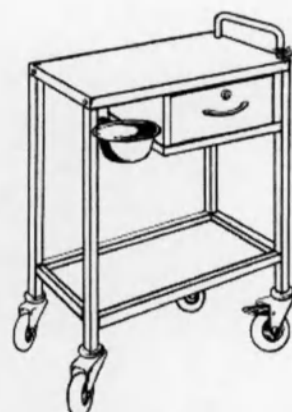

СПп2-01-«МЕДМЭЛ»

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик инструментальный, процедурный (СИп1-01-«МЕДМЭЛ», СИп2-01-«МЕДМЭЛ», СПп2-01-«МЕДМЭЛ») зав. № _____

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

подпись представителя ОТК

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Столик инструментальный, процедурный (СИп1-01-«МЕДМЭД», СИп2-01-«МЕДМЭЛ», СПп2-01-«МЕДМЭЛ») зав. № _____

упакован на предприятии.

Дата упаковки _____

М.П.

Упаковку произвел _____
подпись

					ГАБР.942819.003 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докумен- та	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Столики допускается транспортировать всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и действующими правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 7.2 Размещение и крепление ящиков со столиками должно обеспечивать устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и ударов их друг о друга и о стенки транспортных средств.
- 7.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
- 7.4 Хранение столиков должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

					ГАБР.942819.003 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докумен- та	Подпись	Дата		

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода столика процедурно-манипуляционного в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки его с предприятия-изготовителя.
- 8.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие по предъявлению гарантийного талона.
- 8.4 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации и хранения;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в столик процедурно-манипуляционный вызванных неаккуратным обращением в процессе эксплуатации.

					ГАБР.942819.003 ПС	Лист
						8
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 11.1 В случае возникновения поломок изделий, входящих в состав столика, в период гарантийного срока, необходимо составить технически обоснованный АКТ рекламации и сделать выписку из раздела «Свидетельство о приемке».

АКТ с приложениями следует направить на предприятие, осуществляющее гарантийное обслуживание столика процедурно-манипуляционного.

- 11.2 Гарантийное обслуживание столика производит предприятие «МЕДМЭЛ», расположенное по адресу:
г. Москва, 2-ой Амбулаторный проезд, 8 стр.3.
Тел./факс : (095) 152-17-46, (095) 152-19-84.

- 11.3 Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 3.

Таблица 3

Дата	Номер рекламационного акта	Краткое содержание Рекламационного акта	Меры, принятые по рекламации

					ГАБР.942819.003 ПС	Лист
						9
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

10 листах

Генеральный директор ЗАО «МЕДМЭЛ»
Ломидзе Н.Г.

