



КОЛЬЦА МАТОЧНЫЕ резиновые (пессарии) с клапаном

№ 1

ТУ 9398-009-05769082-2004

ПУ № ФСР 2008/03502 от 11.01.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ISO 9001:2015

Кольца маточные применяются в гинекологической практике по назначению врача.
Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация
Кольца дезинфицируют погружением в 3% раствор перекиси водорода (ГОСТ 177) при температуре не менее 18 °С. Время выдержки - (180 ± 5) мин.
Предстерилизационную очистку проводят погружением в моющий раствор: 17 см³ перекиси водорода (ГОСТ 177), 5 г моющего средства (ГОСТ 25644-88), 978 см³ питьевой воды (ГОСТ 2874) при температуре (50±5)°С. Время выдержки - (15 ± 5) мин. Температура раствора в процессе мойки не поддерживается. Затем изделия промывают в проточной воде и подсушивают при комнатной температуре.
Стерилизацию колец проводят погружением в 6% перекиси водорода (ГОСТ 177) при температуре не менее 18 °С. Время выдержки - (360±5) мин. Затем изделия промывают дистиллированной водой и подсушивают при комнатной температуре.
Интервалы между циклами должны быть не менее 15 мин.

Хранение

Кольца должны храниться в помещении при температуре не более 25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей.

Гарантийное обязательство

Изготовитель гарантирует качество колец требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок годности колец — 1 год со дня изготовления.

Утилизация

Утилизация колец маточных после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» - для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287-113.

Неиспользованные кольца маточные по окончании срока годности относятся к медицинским отходам класса А и утилизируются как бытовые отходы.

Дата выпуска (месяц, год)

Производитель: ООО «Объединение Альфапластик»,
Россия,
107150, г. Москва, 4-ый проезд Подбельского, д.3
302011 г. Орел, Новосильское шоссе, д.14



КОЛЬЦА МАТОЧНЫЕ резиновые (пессарии) с клапаном

№ 2

ТУ 9398-009-05769082-2004

ПУ № ФСР 2008/03502 от 11.01.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ISO 9001:2015

Кольца маточные применяются в гинекологической практике по назначению врача.
Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация
Кольца дезинфицируют погружением в 3% раствор перекиси водорода (ГОСТ 177) при температуре не менее 18 °С. Время выдержки - (180 ± 5) мин.
Предстерилизационную очистку проводят погружением в моющий раствор: 17 см³ перекиси водорода (ГОСТ 177), 5 г моющего средства (ГОСТ 25644-88), 978 см³ питьевой воды (ГОСТ 2874) при температуре (50±5)°С. Время выдержки - (15 ± 5) мин. Температура раствора в процессе мойки не поддерживается. Затем изделия промывают в проточной воде и подсушивают при комнатной температуре.
Стерилизацию колец проводят погружением в 6% перекиси водорода (ГОСТ 177) при температуре не менее 18 °С. Время выдержки - (360±5) мин. Затем изделия промывают дистиллированной водой и подсушивают при комнатной температуре.
Интервалы между циклами должны быть не менее 15 мин.

Хранение

Кольца должны храниться в помещении при температуре не более 25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей.

Гарантийное обязательство

Изготовитель гарантирует качество колец требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок годности колец — 1 год со дня изготовления.

Утилизация

Утилизация колец маточных после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» - для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287-113.

Неиспользованные кольца маточные по окончании срока годности относятся к медицинским отходам класса А и утилизируются как бытовые отходы.

Дата выпуска (месяц, год)

Производитель: ООО «Объединение Альфапластик»,
Россия,
107150, г. Москва, 4-ый проезд Подбельского, д.3
302011 г. Орел, Новосильское шоссе, д.14



КОЛЬЦА МАТОЧНЫЕ резиновые (пессарии) с клапаном

№ 3

ТУ 9398-009-05769082-2004

ПУ № ФСР 2008/03502 от 11.01.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ISO 9001:2015

Кольца маточные применяются в гинекологической практике по назначению врача.
Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация
Кольца дезинфицируют погружением в 3% раствор перекиси водорода (ГОСТ 177) при температуре не менее 18 °С. Время выдержки - (180 ± 5) мин.
Предстерилизационную очистку проводят погружением в моющий раствор: 17 см³ перекиси водорода (ГОСТ 177), 5 г моющего средства (ГОСТ 25644-88), 978 см³ питьевой воды (ГОСТ 2874) при температуре (50±5)°С. Время выдержки - (15 ± 5) мин. Температура раствора в процессе мойки не поддерживается. Затем изделия промывают в проточной воде и подсушивают при комнатной температуре.
Стерилизацию колец проводят погружением в 6% перекиси водорода (ГОСТ 177) при температуре не менее 18 °С. Время выдержки - (360±5) мин. Затем изделия промывают дистиллированной водой и подсушивают при комнатной температуре.
Интервалы между циклами должны быть не менее 15 мин.

Хранение

Кольца должны храниться в помещении при температуре не более 25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей.

Гарантийное обязательство

Изготовитель гарантирует качество колец требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
Гарантийный срок годности колец — 1 год со дня изготовления.

Утилизация

Утилизация колец маточных после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» - для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287-113.

Неиспользованные кольца маточные по окончании срока годности относятся к медицинским отходам класса А и утилизируются как бытовые отходы.

Дата выпуска (месяц, год)

Производитель: ООО «Объединение Альфапластик»,
Россия,
107150, г. Москва, 4-ый проезд Подбельского, д.3
302011 г. Орел, Новосильское шоссе, д.14



*Копия верна
и.о. директор ООО
ООО "Объединение Альфапластик"*



ООО
«Объединение Альфапластик»



ISO 9001: 2015

**КОЛЬЦА МАТОЧНЫЕ
резиновые (пессарии)
с клапаном
№ 2**

Количество: **20 шт.**

ТУ 9398-009-05769082-2004

РУ №ФСР 2008/03502 от 11 января 2016 г.

Дата выпуска (месяц, год)

Упаковщик

Гарантийный срок годности – 1 год
со дня изготовления.

Производитель: ООО


«Объединение Альфапластик»

Россия, 107150, г. Москва,

4-й проезд Подбельского, д. 3

302011, г. Орел,

Новосильское шоссе, д.14

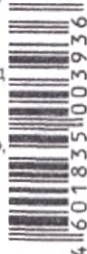

4 601835 003936



ООО
«Объединение Альфапластик»



ISO 9001: 2015

**КОЛЬЦА МАТОЧНЫЕ
резиновые (пессарии)
с клапаном
№ 3**

Количество: **20 шт.**

ТУ 9398-009-05769082-2004

РУ №ФСР 2008/03502 от 11 января 2016 г.

Дата выпуска (месяц, год)

Упаковщик

Гарантийный срок годности – 1 год
со дня изготовления.

Производитель: ООО


«Объединение Альфапластик»

Россия, 107150, г. Москва,

4-й проезд Подбельского, д. 3

302011, г. Орел,

Новосильское шоссе, д.14

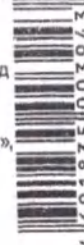


4 601835 003943



*Вотма верна.
И.В. директор ООО
ООО "Объединение Альфапластик"*

И.В. Смирнов

Кольца маточные резиновые (пессарии)
с клапаном № 1, 2, 3
по ТУ 9398-009-05769082-2004

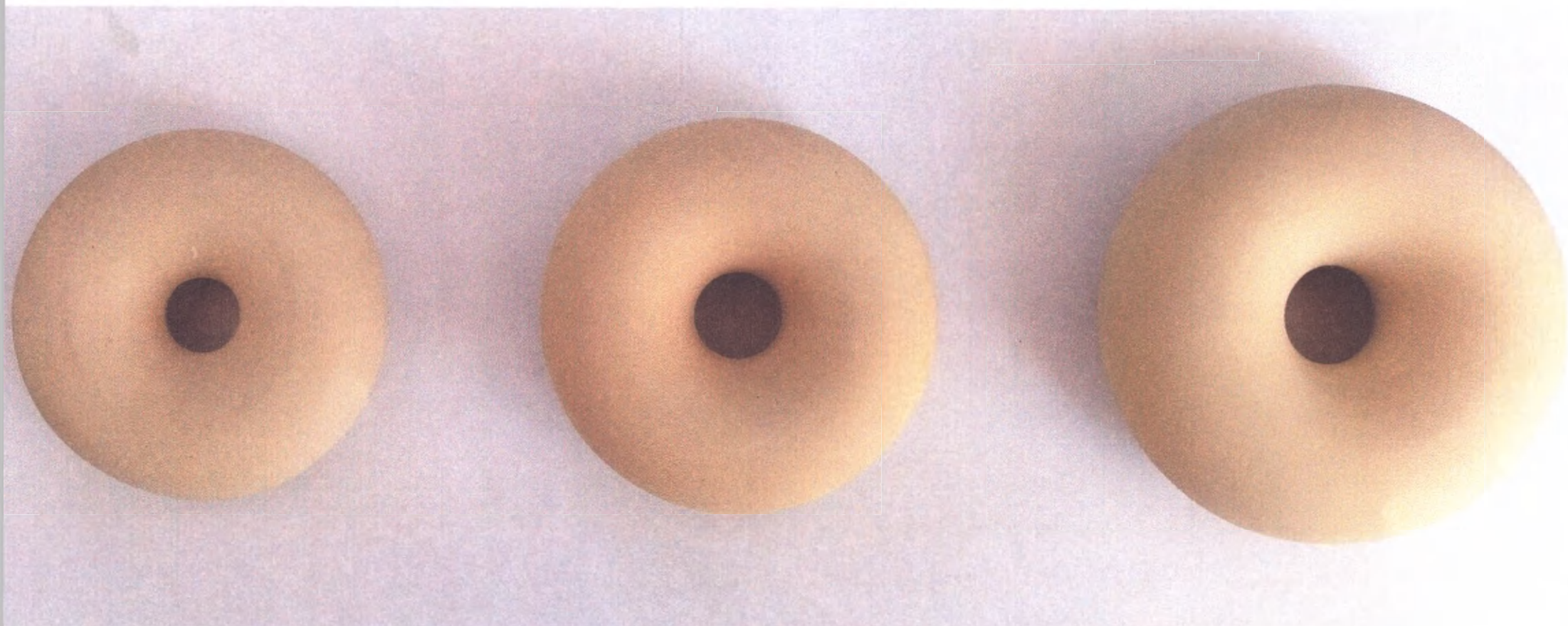

Кольцо маточное
резиновое
(пессарий)
с клапаном № 1



Кольцо маточное
резиновое
(пессарий)
с клапаном № 2

Кольцо маточное
резиновое
(пессарий)
с клапаном № 3

Роман Веригин

Н. Н. Стурженок



Кольцо маточное резиновое (пессарий)
с клапаном № 1

по ТУ 9398-009-05769082-2004

в индивидуальной упаковке

*Котик Верия,
и.о. директора ООО
ООО «Объединение Амбулаторных
и Клинических Технологий»*



Смирнов



КОЛЬЦА МАТОЧНЫЕ резиновые (пессарии) с клапаном

№ 1

ТУ 9398-009-05769082-2004

ПУ № ФСР 2008/03502 от 11.01.2016 г.



ISO 9001: 2015

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кольца маточные применяются в гинекологической практике по назначению врача.

Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация

Кольца дезинфицируют погружением в 3% раствор перекиси водорода (ГОСТ 177) при температуре не менее 18°C. Время выдержки - (180 ± 5) мин.

Предстерилизационную очистку проводят погружением в моющий раствор: 17 см³ перекиси водорода (ГОСТ 177), 5 г моющего средства (ГОСТ 25644-88), 978 см³ питьевой воды (ГОСТ 2874) при температуре (50 ± 5)°C. Время выдержки - (15 ± 5) мин. Температура раствора в процессе мойки не поддерживается. Затем изделия промывают в проточной воде и подсушивают при комнатной температуре.

Стерилизацию колец проводят погружением в 6% перекись водорода (ГОСТ 177) при температуре не менее 18°C. Время выдержки - (360 ± 5) мин. Затем изделия промывают дистиллированной водой и подсушивают при комнатной температуре.

Интервалы между циклами должны быть не менее 15 мин.

Хранение

Кольца должны храниться в помещении при температуре не более 25°C на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов и должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей.

Гарантийное обязательство

Изготовитель гарантирует качество колец требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок годности колец — 1 год со дня изготовления.

Утилизация

Утилизация колец маточных после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» - для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287-113.

Неиспользованные кольца маточные по окончании срока годности относятся к медицинским отходам класса А и утилизируются как бытовые отходы.

Дата выпуска (месяц, год)

02 2020 07х

Производитель: ООО «Объединение Алфапластик»,
Россия,

107150, г. Москва, 4-ый проезд Подбельского, д.3

302011 г. Орел, Новосильское шоссе, д.14



Кольцо маточное резиновое (пессарий)

с клапаном № 1

по ТУ 9398-009-05769082-2004

в индивидуальной упаковке




Копия верна.

И.О. директор ОЗН

ООО «Объединение Алфапластик»

Готов
В.О. Рыжов
03.04
"Информационно-аналитический центр"

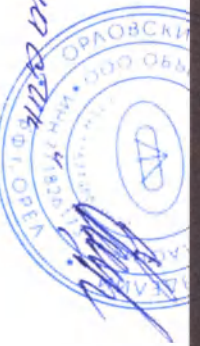

Н.Н. Сидорова



ООО
«Объединение Альфапластик»



ИСО 9001:2015

**КОЛЬЦА МАТОЧНЫЕ
резиновые (пессарии)
с клапаном
№ 1**

Количество: **20 шт.**
ТУ 9398-009-05769082-2004
РУ №ФСР 2008/03502 от 11 января 2016 г.
Дата выпуска (месяц, год)
Упаковщик **02/202 00ТК**
Гарантийный срок годности – 1 год
со дня изготовления.
Производитель: ООО
«Объединение Альфапластик»,
Россия, 107150, г. Москва,
4-й проезд Подбельского, д. 3
302011, г. Орел,
Новосильское шоссе, д.14



Кольца маточные резиновые (пессарии) с клапаном № 1
по ТУ 9398-009-05769082-2004