

Микроскоп и его части

Основная сборка

Нижеследующий общий обзор показывает и описывает сборку собственно микроскопа и его дополнительного оборудования.

Рис. 1 Правая сторона станины микроскопа

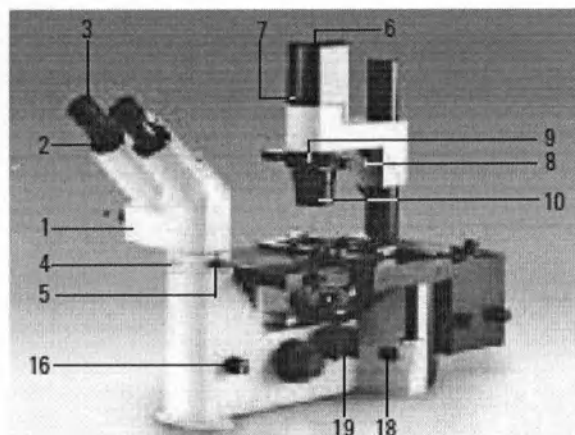


Рис. 2 Левая сторона станины микроскопа

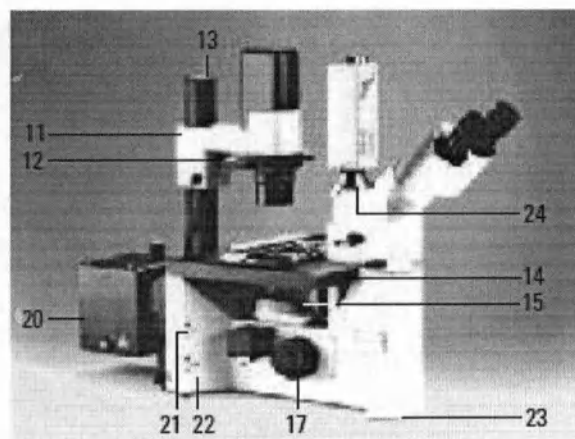


Рис. 1-3

1 Бинокулярный фототубус DM ILT, 2 Окулярная трубка, 3 Окуляры, 4 Держатель тубуса, 5 Пустой слот ICS модулятора, 6 Встроенный держатель лампы с 6В/35 Вт галогенной лампой, 7 Держатель для 32 мм фильтра, 8 Пустой слот либо для модульного, либо для фазового контраста, 9 Апертурная диафрагма, 10 Конденсор S 55, 11 Держатель осветителя проходящего света, 12 Ручка с отметками для настройки конденсора, 13 Колонка проходящего света, 14 Предметный столик, 15 Револьверная головка-держатель объективов с объективами, 16 Настройка яркости, 17 Макровинт и микровинт настройки фокуса, 18 Сетевой переключатель, 19 Блок флуоресцентных фильтров, 20 Держатель флуоресцентной лампы, 21 Световая диафрагма, 22 Фильтр BG9, 23 Стабилизирующая пластина, 24 Видео адаптер с резьбовым соединением, 25 Адаптер тубуса IL/L, 26 DM L тубусы, 27 Оборудование для второго исследователя, 28 Конденсор S 90

Рис. 3 Станина микроскопа с DM L тубусами и оборудованием для второго исследователя

