

Super Gemma 20

Gemma
Super Gemma 20

충전식고


인공치 및 CAD/CAM 치환에 적합한
고강도로 충합한 치수를 가진 세라믹재
For Crown and Bridge Dies

NET, 1.5KG

How to use (사용방법)

1. 표준혼수량 : 물 35ml / 분말 100g
2. 약 30초 방치한 후 30~60초간 교반한다.
3. 형틀에 식고 혼합물을 주입한다.
(Vibrator 사용 시 완성도 높은 모형제작 가능)
4. 주입 후 30분 후 식고모형을 분리한다.

1. Standard mixing ratio(%) :
Water 35ml / Powder 100g
2. Leave it for 30 seconds then stirring up
30 to 60 seconds.
3. Pour the gypsum mixture into the mold.
(Use a vibrator for better prototype)
4. After 30 minutes, separate it from the mold.

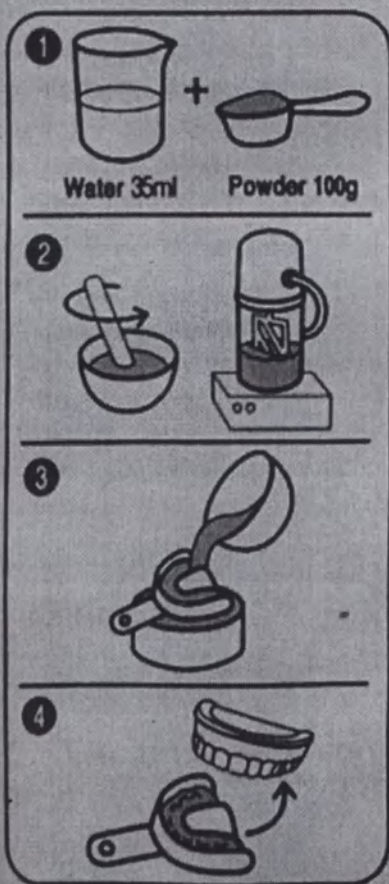

Warnings (사용시 주의사항)

- 분말을 흡입하거나 눈에 들어가지 않도록 주의한다.
- 다량 흡입 및 눈에 들어간 경우 의사의 진단을 받는다.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 표준 혼수량을 준수하여 작업한다.
- Do not inhaling the powder or avoid the eye area.
- In case of contact in the eyes or inhaling too much power, get immediate medical help or see a doctor.
- Keep out of reach of children.
- Keep the standard mixing ratio.

Purpose of use (제품의 사용목적)

- 치과용 모형을 만드는 재료
- Use for making dental plaster

How to store (보관 또는 저장방법)

흡습성이 있으므로 사용 후 밀폐하고,
고온다습한 곳은 피해서 보관할 것.

Please be sure to seal the product and
avoid excessive heat and humidity

본 제품은 의료기기입니다.

This product is medical equipment.



Mega Gemma 23

Gemma
Mega Gemma 23


ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
For Models

WET, 1,5KG

How to use (사용방법)

1. 표준혼수량 : 물 35ml / 분말 100g
2. 약 30초 방치한 후 30~60초간 교반한다.
3. 형틀에 식고 혼합물을 주입한다.
(Vibrator 사용 시 완성도 높은 모형제작 가능)
4. 주입 후 30분 후 식고모형을 분리한다.

1. Standard mixing ratio(%) :
Water 35ml / Powder 100g
2. Leave it for 30 seconds then stirring up
30 to 60 seconds.
3. Pour the gypsum mixture into the mold.
(Use a vibrator for better prototype)
4. After 30 minutes, separate it from the mold.

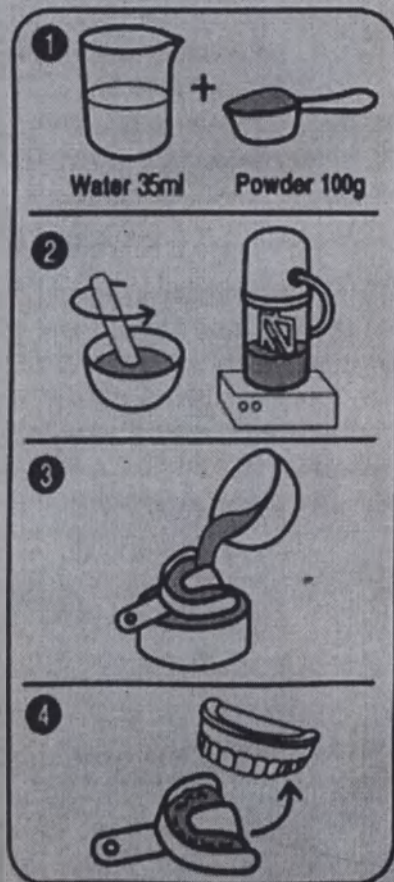

Warnings (사용시 주의사항)

- 분말을 흡입하거나 눈에 들어가지 않도록 주의한다.
- 다량 흡입 및 눈에 들어간 경우 의사의 진단을 받는다.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 표준 혼수량을 준수하여 작업한다.
- Do not inhaling the powder or avoid the eye area.
- In case of contact in the eyes or inhaling too much power, get immediate medical help or see a doctor.
- Keep out of reach of children.
- Keep the standard mixing ratio.

Purpose of use (제품의 사용목적)

- 치과용 모형을 만드는 재료
- Use for making dental plaster

How to store (보관 또는 저장방법)

흡습성이 있으므로 사용 후 밀폐하고,
고온다습한 곳은 피해서 보관할 것.

Please be sure to seal the product and
avoid excessive heat and humidity

본 제품은 의료기기입니다.

This product is medical equipment.



Orthodontic Gemma 24

Gemma
Orthodontic Gemma 24


건강성을 고려한 특별한 제법으로
치아교정용 위해
자수 함유성과 심미성을 모두에
뛰어난 교정 도판 실용에 적합합니다
For Orthodontics

NET, 1.5KG

How to use (사용방법)

1. 표준혼수량 : 물 35ml / 분말 100g
2. 약 30초 방치한 후 30-60초간 교반한다.
3. 형틀에 식고 혼합물을 주입한다.
(Vibrator 사용 시 완성도 높은 모형제작 가능)
4. 주입 후 30분 후 식고모형을 분리한다.

1. Standard mixing ratio(%) :
Water 35ml / Powder 100g
2. Leave it for 30 seconds then stirring up
30 to 60 seconds.
3. Pour the gypsum mixture into the mold.
(Use a vibrator for better prototype)
4. After 30 minutes, separate it from the mold.

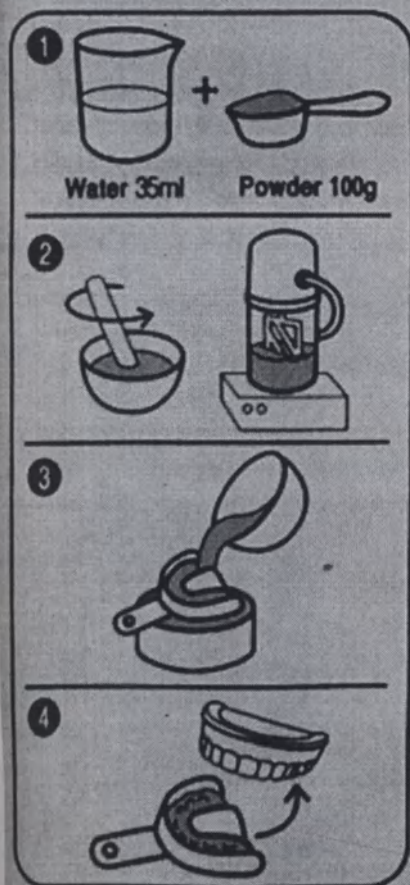

Warnings (사용시 주의사항)

- 분말을 흡입하거나 눈에 들어가지 않도록 주의한다.
- 다량 흡입 및 눈에 들어간 경우 의사의 진단을 받는다.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 표준 혼수량을 준수하여 작업한다.
- Do not inhaling the powder or avoid the eye area.
- In case of contact in the eyes or inhaling too much power, get immediate medical help or see a doctor.
- Keep out of reach of children.
- Keep the standard mixing ratio.

Purpose of use (제품의 사용목적)

- 치과용 모형을 만드는 재료
- Use for making dental plaster

How to store (보관 또는 저장방법)

흡습성이 있으므로 사용 후 밀폐하고,
고온다습한 곳은 피해서 보관할 것.

Please be sure to seal the product and
avoid excessive heat and humidity

본 제품은 의료기기입니다.

This product is medical equipment.



Base Gemma 35

Gemma

Base Gemma 35


고강도, 저팽창을 가진 제품이며,
흐름성이 우수하여 vibration이 없어도
기포가 발생하지 않아
안정적인 작업성을 가집니다
For Pinning base

WET. 1.5KG

How to use (사용방법)

1. 표준혼수량 : 물 35ml / 분말 100g
2. 약 30초 방치한 후 30~60초간 교반한다.
3. 형틀에 식고 혼합물을 주입한다.
(Vibrator 사용 시 완성도 높은 모형제작 가능)
4. 주입 후 30분 후 식고모형을 분리한다.

1. Standard mixing ratio(%) :
Water 35ml / Powder 100g
2. Leave it for 30 seconds then stirring up
30 to 60 seconds.
3. Pour the gypsum mixture into the mold.
(Use a vibrator for better prototype)
4. After 30 minutes, separate it from the mold.

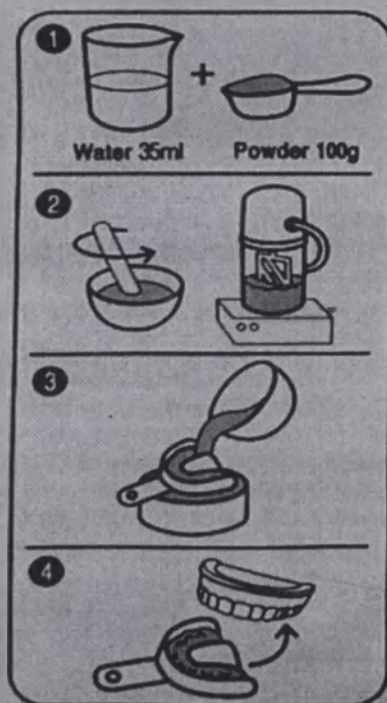

Warnings (사용시 주의사항)

- 분말을 흡입하거나 눈에 들어가지 않도록 주의한다.
- 다량 흡입 및 눈에 들어간 경우 의사의 진단을 받는다.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 표준 혼수량을 준수하여 작업한다.
- Do not inhaling the powder or avoid the eye area.
- In case of contact in the eyes or inhaling too much powder, get immediate medical help or see a doctor.
- Keep out of reach of children.
- Keep the standard mixing ratio.

Purpose of use (제품의 사용목적)

- 치과용 모형을 만드는 재료
- Use for making dental plaster

How to store (보관 또는 저장방법)

흡습성이 있으므로 사용 후 밀폐하고,
고온다습한 곳은 피해서 보관할 것.

Please be sure to seal the product and
avoid excessive heat and humidity

본 제품은 의료기기입니다.

This product is medical equipment.



Silky Gemma 40

CLASS 2

Gemma

Silky Gemma 40

연석고

뛰어난 경제성을 바탕으로

BASE 작업용으로 널리 사용됩니다

For Plaster for attaching models
to articulator

How to use (사용방법)

1. 표준혼수량 : 물 40ml / 분말 100g
2. 약 30초 방치한 후 30~60초간 교반한다.
3. 형틀에 석고 혼합물을 주입한다.
(Vibrator 사용 시 완성도 높은 모형제작 가능)
4. 주입 후 30분 후 석고모형을 분리한다.

1. Standard mixing ratio(%) :
Water 40ml / Powder 100g
2. Leave it for 30 seconds then stirring up
30 to 60 seconds.
3. Pour the gypsum mixture into the mold.
(Use a vibrator for better prototype)
4. After 30 minutes, separate it from the mold.




“ PREMIUM
DENTAL GYPSUM PRODUCTS
www.gemma.co.kr



삼우
SAMWOO CO., LTD

How to use (사용방법)

1. 표준혼수량 : 물 35ml / 분말 100g
 2. 약 30초 방치한 후 30~60초간 교반한다.
 3. 형틀에 석고 혼합물을 주입한다.
(Vibrator 사용 시 완성도 높은 모형제작 가능)
 4. 주입 후 30분 후 석고모형을 분리한다.
1. Standard mixing ratio(%) :
Water 35ml / Powder 100g
 2. Leave it for 30 seconds then stirring up
30 to 60 seconds.
 3. Pour the gypsum mixture into the mold.
(Use a vibrator for better prototype)
 4. After 30 minutes, separate it from the mold.

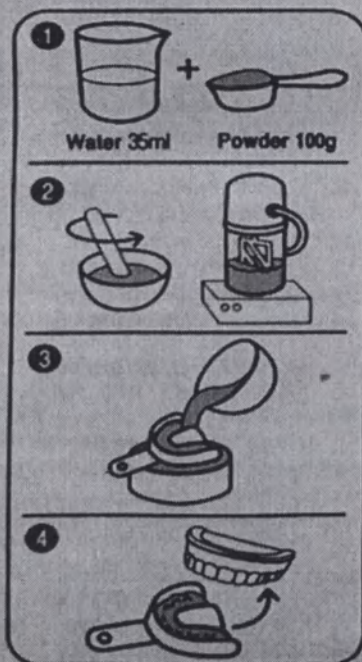

Warnings (사용시 주의사항)

- 분말을 흡입하거나 눈에 들어가지 않도록 주의한다.
- 다량 흡입 및 눈에 들어간 경우 의사의 진단을 받는다.
- 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 표준 혼수량을 준수하여 작업한다.
- Do not inhaling the powder or avoid the eye area.
- In case of contact in the eyes or inhaling too much power, get immediate medical help or see a doctor.
- Keep out of reach of children.
- Keep the standard mixing ratio.

Purpose of use (제품의 사용목적)

- 치과용 모형을 만드는 재료
- Use for making dental plaster

How to store (보관 또는 저장방법)

흡습성이 있으므로 사용 후 밀폐하고,
고온다습한 곳은 피해서 보관할 것.

Please be sure to seal the product and
avoid excessive heat and humidity

본 제품은 의료기기입니다.

This product is medical equipment.

