

Общество с ограниченной ответственностью

"Завод Металлической и Медицинской Мебели"

**Россия 127521, г.Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д.8
тел. 619-26-38
факс 618-51-31**

ПАСПОРТ

**Столик с выдвижными
ящиками.**

МММ-504

ТУ-9452-005-32466639-2002

Назначение:

Стол с выдвижными ящиками МММ-504 предназначен для хранения личных вещей пациентов.


Применяется для оснащения лечебно-профилактических учреждений.

Технические данные:

Габариты:

длина	550 мм
ширина	416 мм
высота со спинкой	825 мм
масса не более	30 кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет.

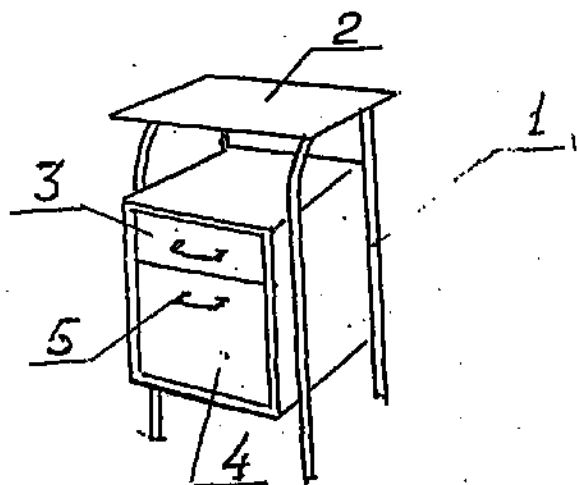

Комплект поставки:

1. Каркас(поз.1) - 1 шт.
2. Столешница (поз.2) - 1 шт.
3. Ящик верхний(малый) (поз.3) - 1 шт.
4. Ящик нижний (большой) (поз.4) - 1 шт.
5. Ручка в комплекте с винтами(поз.5) - 2 к-та.

Инструкция по монтажу и эксплуатации:

Установить верхний и нижний ящики как показано на рисунке.

Примечание: не допускается устанавливать на столешницу груз более 20 кг.

Хранение:

Столик подкатной должен храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части столика подкатного имеют защитно-декоративное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости столика подкатного подвергают дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или тампоном смоченным 1% раствором хлорамида по ТУ6-014689387-1689 (тампоны должны быть отжаты).

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок столика подкатного составляет 18 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта.

Все претензии предъявляются продавцу только при наличии паспорта на изделие.

Дата выпуска

Представитель ОТК

Общество с ограниченной ответственностью

" Завод Металлической и Медицинской Мебели"

**Россия 127521, г.Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д.8
тел. 619-26-38
факс 618-51-31**

ПАСПОРТ

Столик подкатной

MMM-505

ТУ-9452-006-32466639-97

Назначение:

Стол подкатной МММ-505 предназначен для оборудования лечебно-профилактических учреждений.

Стол применяется для хранения хирургических инструментов.


Технические данные:**Габариты:**

длина	795 мм
ширина	500 мм
высота со спинкой	950... 1200 мм
масса не более	15 кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ25.В00668

срок действия по 05.10.2010г.

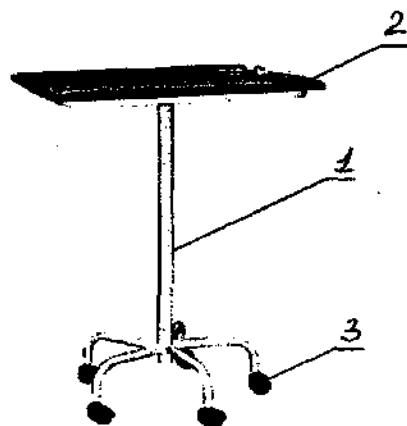

Комплект поставки:

1. Основание(поз.1) - 1 шт.
2. Столешница (поз.2) - 1 шт.
3. Опора роликковая(поз.3) - 5 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации:

Ввернуть в отверстие 5-ти лучевого основания колесные опоры.(поз.3)

Вставить в основание столешницу(поз.2)

Не допускается устанавливать на столешницу груз весом более 5 кг.

Периодически проверять крепление колес в процессе эксплуатации.

Хранение:

Столик подкатной должен храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей,вызывающих коррозию.

Все металлические части столика подкатного имеют защитно-декоративное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости столика подкатного подвергают дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или тампоном смоченным 1% раствором хлорамида по ГУ6-014689387-1689

(тампоны должны быть отжаты).

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок столика составляет 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта.

Все претензии предъявляются продавцу только при наличии паспорта на изделие.

Дата выпуска

Представитель ОТК



ООО ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Общество с ограниченной ответственностью

"Завод Металлической и Медицинской Мебели"

Россия 127521, г.Москва

12-й проезд Марьиной рощи, д.8

тел. 619-26-38

факс 618-51-31

ПАСПОРТ

Столик со стеклянной столешницей.

МММ-509

ТУ-9452-005-32466639-2002

Назначение:

Столик со стеклянной столешницей МММ-509 предназначен для оборудования лечебно-профилактических учреждений.

Стол служит для размещения инструментов и медикаментов.


Технические данные:

Габариты:

длина	700 мм
ширина	425 мм
высота со спинкой	797 мм
масса не более	30 кг
допустимая нагрузка	2 кг
на столешницу и полку	

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ25.В00664
срок действия по 05.10.2010г.

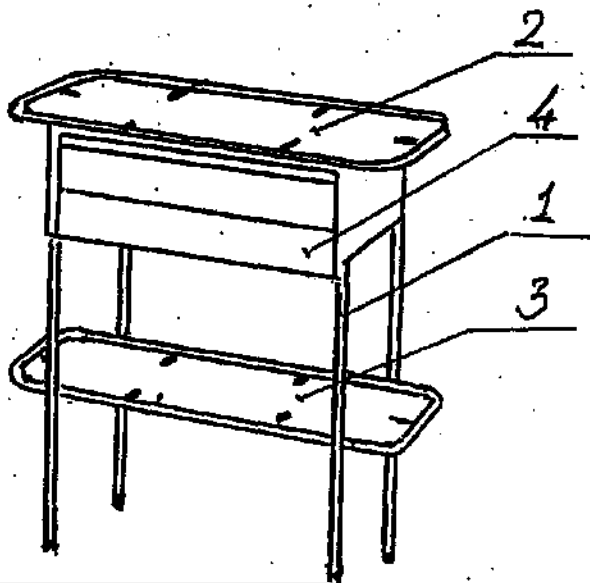

Комплект поставки:

1. Металлический каркас(поз.1) - 1 шт.
2. Столешница стеклянная(поз.2) - 1 шт.
3. Полка стеклянная(поз.3) - 1 шт.
4. Ящик металлический(поз.4) - 2 шт.
5. Резиновая прокладка $\varnothing 14 \text{ h}=4$ - 12 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации:

Установить верхнюю стеклянную столешницу и нижнюю стеклянную полку на резиновые прокладки(поз.5).

Установить 2 ящика(поз.4)

Хранение:

Столик должен храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до $+40^{\circ}\text{C}$ в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части столика имеют защитно-декоративное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости столик подвергают дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или тампоном смоченным 1% раствором хлорамида по ТУ6-014689387-1689 (тампоны должны быть отжаты).