


2. Схема устройства Рукоятки безузелкового импланта (на примере импланта Labralock) для исполнения Opus LabraFix

Пример 1.

Labralock P Implant

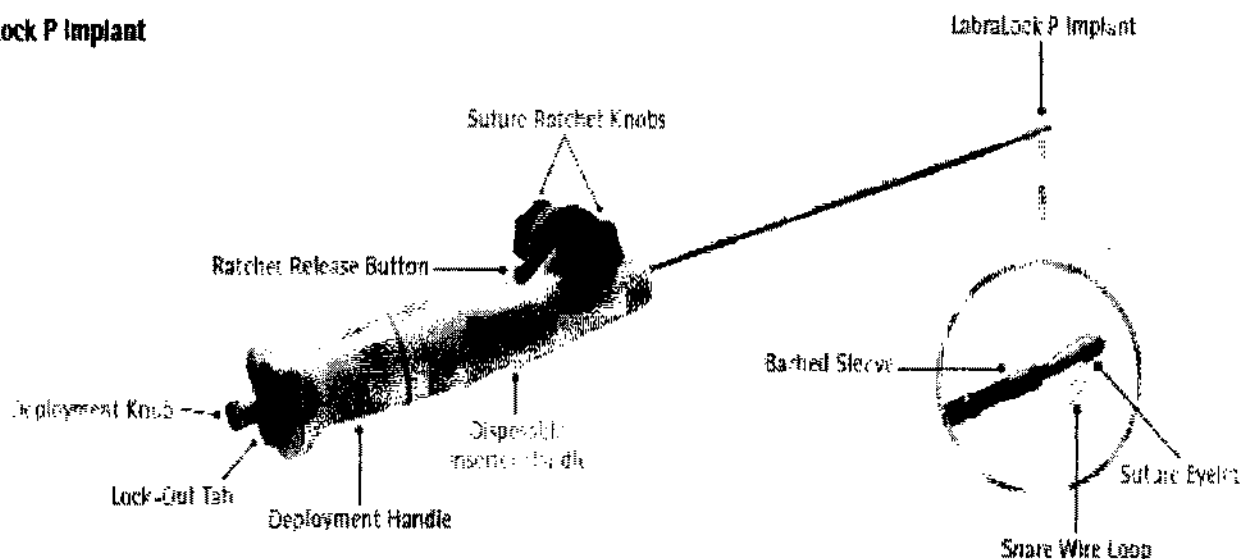

Рукоятка безузелкового импланта Labra Lock для исполнения Opus LabraFix с интегрированным имплантом, создана для использования в гленоидальной суставной ямке. Имплант интегрированный в рукоятку является компактным рентгенопрозрачным РЕЕК анкером, выполняющим главную роль в фиксации кости. Рукоятки безузелкового импланта Labra Lock для исполнения Opus LabraFix используется, как рациональный механизм для перемещения ткани лабрума в гленоидальную суставную ямку и безопасным в процессе выполнения операции с помощью блокиратора шовного материала – запатентованного TriLock.

Детали Импланта Labra Lock P (подписи к рисунку)

1. Кнопка спуска храпового механизма (Ratchet Release Button)
2. Ручки храпового механизма для подачи шовного материала (suture ratchet knobs)
3. Загрузочное устройство для шовного материала (suture eyelet)
4. Имплант
5. Муфта, имеющая зазубрины (barbet sleeve)
6. Хирургическая петля (share wire loop)
7. Ушко для прохода шовного материала (suture eyelet)
8. Одноразовая вставочная рукоять (disposable inserter handle)
9. Отворачивающаяся рукоять (deployment handle)
10. Блокирующий переключатель lock-out tab