

Общество с ограниченной ответственностью

" Завод Металлической и Медицинской Мебели"

**Россия 127521, г.Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д.8
тел. 619-26-38
факс 618-51-31**

ПАСПОРТ

Кресло-коляска

ККИ-01-ЗМММ.

ТУ-9451-024-32466639-01

Назначение:

Кресло-коляска ККИ-01-ЗМММ.(исполнение б) предназначена для перевозки инвалидов с частичной утратой функции опорно-двигательного аппарата.

Кресло-коляска применяется для оснащения лечебно-профилактических, социально-бытовых учреждений, а также в быту.


Технические данные:

Габариты:

длина	1050 мм
ширина	640 мм
высота	915 мм
масса не более	16,5 кг
допустимая нагрузка не более	140 кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ25.В00663
срок действия по 05.10.2010г.

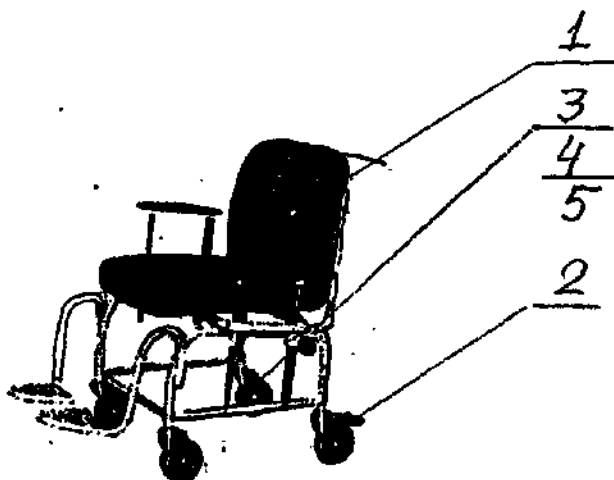

Комплект поставки: 1 Кресло-коляска в сборе(поз.1)- 1 шт.

2. Опора колесная с тормозом Ø125мм(поз.3) - 1 шт
3. Опора колесная без тормоза Ø125мм(поз.2) - 3 шт
4. Болты М10х30(поз.4) - 4 шт.
5. Шайбы 10.65Г.2,5(поз.5) - 4 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации:

Привернуть колёса (поз.2и3) к ножкам каркаса (поз.1) болтами через шайбу. Усилие затяжки болтов не менее 52 н.м.

Примечание:

Колесную опору с тормозом установить со стороны поручня.

Периодически проверять крепление колес в процессе эксплуатации.

Перемещение изделия осуществлять по ровному полу с отключённым тормозом.

Хранение:

Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С и относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части изделия имеют защитно-декоративное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости изделие подвергают дезинфекции

3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или тампоном смоченным 1% раствором хлорамида по ТУ6-014689387-1689 (тампоны должны быть отжаты).

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта.

Все претензии предъявляются продавцу только при наличии паспорта на изделие.

Дата выпуска

Представитель ОТК

Закрытое Акционерное Общество

" Завод Металлической и Медицинской Мебели"

**Россия 127521, г.Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д.8
тел. 219-26-38
факс 218-51-31**

ПАСПОРТ

Кресло-коляска

ККИ-01-3МММ.а

ТУ-9451-024-32466639-01

Назначение:


Кресло-коляска ККИ-01-ЗМММ.а предназначена для перевозки инвалидов с частичной утратой функции опорно-двигательного аппарата.

Кресло-коляска применяется для оснащения лечебно-профилактических, социально-бытовых учреждений, а также в быту.

Технические данные:**Габариты:**

длина	765 мм
ширина	452 мм
высота	948 мм
масса не более	16,5 кг
допустимая нагрузка не более	140 кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет.

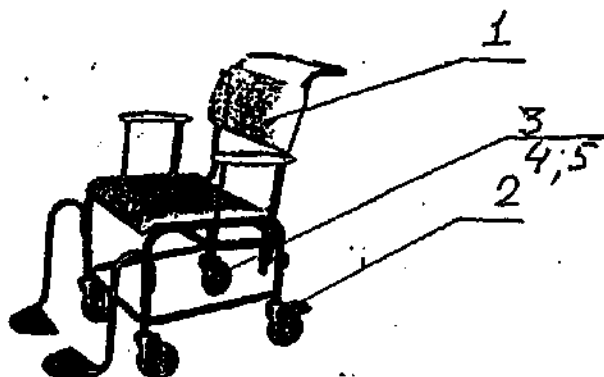

- Комплект поставки:
- 1 Кресло-коляска в сборе(поз.1)- 1 шт.
 2. Опора колесная с тормозом $\varnothing 125\text{мм}$ (поз.3) - 1 шт
 3. Опора колесная без тормоза $\varnothing 125\text{мм}$ (поз.2) - 3 шт
 4. Болты М10х30(поз.4) - 4 шт.
 5. Шайбы 10.65Г.2,5(поз.5) - 4 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации:

Привернуть колёса (поз.2и3) к ножкам каркаса (поз.1) болтами через шайбу. Усилие затяжки болтов не менее 52 н.м.

Примечание:

Колесную опору с тормозом установить со стороны поручня.

Периодически проверять крепление колес в процессе эксплуатации.

Перемещение изделия осуществлять по ровному полу с отключённым тормозом.

Хранение:

Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части изделия имеют защитно-декоративное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости изделие подвергают дезинфекции

3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или тампоном смоченным 1% раствором хлорамида по ТУ6-014689387-1689 (тампоны должны быть отжаты).