

«УТВЕРЖДАЮ»

« I certify»

Анатомик СИТТ АБ

Anatomic SITT AB


Генеральный директор Бо Эрикссон

General Director Bo Eriksson



« » 2016

We hereby certify the
personal signature of

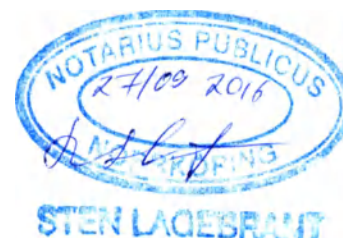

Выписка из технической документации на медицинское изделие
КРЕСЛА-КОЛЯСКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ANATOMIC SITT,
В ИСПОЛНЕНИЯХ, С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

Редакция 2

2016

1

*Настоящая выписка подготовлена для предоставления сведений в целях регистрации
медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения
представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации
медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416).*

Производитель:

Box 6137, 600 06, Norrköping, Sweden (Бокс 6137, 600 06, Норркёпинг,
Швеция).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника»

ООО «Ортоника», юридический адрес: 105554, г. Москва, ул. Парковая 11-я,
д. 9/35, кв. 94

Телефон: +7 (495) 641-71-77

Содержание:

1. Наименование, назначение, состав и принципы функционирования МИ
2. Классификационные сведения
3. Показания и противопоказания
4. Технические характеристики
5. Применяемые материалы
6. Способы очистки и дезинфекции МИ
7. Применяемые стандарты
8. Описание менеджмента рисков
9. Биосовместимость
10. Описание производственного процесса
11. Упаковка и маркировка
12. Условия хранения и транспортировки
13. Утилизация медицинского изделия
14. Техническое обслуживание
15. Гарантийные обязательства
16. Рекламация

1. Наименование, назначение, состав и принципы функционирования МИ.

Кресла-коляски Anatomic SITТ предназначены для передвижения инвалида или человека, не способного самостоятельно ходить и имеющего трудности с поддержанием правильного положения тела. Кресла-коляски передвигаются вручную сопровождающим лицом с помощью ручек изделия. Предусмотрены различные варианты исполнения, предназначенные для пациентов разных возрастных категорий (детей или взрослых). Каждый вариант исполнения имеет свой модельный ряд. Ниже приводится перечень вариантов исполнения и моделей кресел-колясок Anatomic SITТ.

Варианты исполнения:

1. **Кресла-коляски Zitzi Delfi Pro:** модели Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro
2. **Кресла-коляски Zitzi Pengy:** модели Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy.
3. **Кресла-коляски Zitzi Sharky Pro:** модели Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro.
4. **Кресла-коляски Anatomic Sits:** модели Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro.
5. **Кресла-коляски Anatomic Soft Sits:** модели Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro.
6. **Кресло-коляска Carseat Pro.**

Каждая модель кресла-коляски имеет отдельный набор принадлежностей, из общего списка принадлежностей. Общий список и описание всех принадлежностей к МИ приводится ниже. Варианты исполнения и модели кресла коляски Anatomic SITТ с перечнем принадлежностей для каждой модели представлены в Приложении.

Кресла-коляски Anatomic SITТ являются механическими. Все модели кресел-колясок управляются с помощью сопровождающего лица.

Каждая модель кресла-коляски Anatomic SITТ состоит из двух основных компонентов: сиденья и рамы. Существуют несколько моделей сидений Anatomic SITТ, и несколько моделей рам Anatomic SITТ. Для сиденья каждого вида предусмотрена возможность комплектации с несколькими различными видами рам, в зависимости от целевого назначения кресла-коляски и потребностей пациента.

Ниже описаны варианты исполнения и модели кресел-колясок Anatomic SITТ. Кресла-коляски в определенном варианте исполнения сконструированы на основе одной определенной модели сиденья Anatomic SITТ. Все модели в определенном исполнении представляют собой комбинацию данного вида кресла и определенного вида рамы.

Кресла-коляски Anatomic SITТ являются нескладными, за исключением моделей, оснащенных рамами Pengy. Складными являются следующие пять моделей:

- Zitzi Delfi Pro Pengy;
- Zitzi Pengy Pengy;
- Anatomic Sits Pengy;
- Anatomic Soft Sits Pengy;
- Carseat Pro.

Остальные модели кресел-колясок Anatomic SITТ являются нескладными.

1. Кресла-коляски Zitzi Delfi Pro включают в себя модели **Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro.**

Кресла-коляски Zitzi Delfi Pro предназначены для детей и подростков.

Данные кресла коляски сконструированы на основе сиденья Zitzi Delfi Pro. Описанные ниже модели представляют собой комбинацию сиденья Zitzi Delfi Pro и различных видов рам.

Кресла-коляски данной серии являются нескладными, за исключением модели Zitzi Delfi Pro Pengy (складная модель, описание приводится ниже).

Все кресла-коляски в данном варианте исполнения имеют характеристики сиденья (кресла), приведенные ниже.

Кресло Zitzi Delfi Pro предназначено для детей и подростков с нарушением двигательной активности и имеющих трудности с поддержанием правильного положения тела. Кресло изготовлено на основе регулируемых систем соединений. Модель предусматривает комплексные настройки сиденья и спинки.

Сиденье имеет анатомическую форму, обеспечивает естественное положение таза и препятствует сползанию. Предусмотрена возможность регулировать глубину сиденья, изменять параметры аддукции и абдукции. Высота сиденья может регулироваться у моделей Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass.

Параметры сиденья возможно изменять по мере роста ребенка, адаптируя его под текущие потребности.

Спинка также является регулируемой – предусмотрена возможность регулировки ее угла наклона, с помощью газовой пружины. Эта функция способствует смягчению проявлений мышечной спастичности, позволяет корректировать или компенсировать нарушения, обеспечивая оптимальное положение при сидении. В спинку встроен пружинный амортизатор, который также смягчает негативные последствия повышенного тонуса мышц.

Трёхсторонняя боковая поддержка контролирует осанку, уменьшает проявление нарушений, обеспечивает комфорт.

Кресло оснащено регулируемыми опорами для ног.

Модель Zitzi Delfi Pro Flipper Pro



Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Delfi Pro.

Модель нескладная, предназначается для использования внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. (Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Функция «регулировка угла наклона сиденья» является отличительной особенностью рамы, данная функция позволяет не нарушать баланс и стабильность положения пользователя. Таким образом, центр тяжести не смещается. Также предусмотрена регулировка высоты сиденья. Изменение данных параметров

сиденья осуществляется с помощью газовой пружины.

Предусмотрена возможность регулировать угол наклона спинки с помощью газовой пружины.

Предусмотрены размеры 0, 1, 2, 3, 4 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex

Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Delfi Pro.

Модель нескладная. Предназначается для использования как внутри помещений, так и на улице.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. (Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).



Регулировка угла наклона и высоты сиденья осуществляется при помощи газовой пружины.

Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.

Отличительной особенностью модели является возможность оснащения колесами большего диаметра, 30 см или 40 см (в чем заключается принципиальное отличие от предыдущей модели с рамой Flipper Pro. Подробные характеристики изложены в пункте «Технические характеристики» ниже).

Предусмотрены размеры 0, 1, 2, 3, 4 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Zitzzi Delfi Pro Snapper



Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzzi Delfi.

Модель нескладная. Конструкция рамы предполагает использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. (Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.

Отличительные особенности – компактность рамы, ориентированность на домашнее использование, возможность регулировки угла наклона и высоты сиденья (с помощью газовой пружины).

Предусмотрены размеры 0, 1, 2, 3, 4 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Zitzi Delfi Pro Pengy



Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Delfi Pro.

Конструкция рамы предполагает преимущественное использование на улицах, хотя использование внутри помещений также возможно.


Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, абдукция – аддукция. (Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.

Отличительные особенности рамы:

- наличие встроенной динамической системы подвески, которая обеспечивает плавное передвижение по неровным поверхностям;
- возможность оснащения колесами повышенной проходимости, что делает возможным использование модели не только на твердом, асфальтовом, покрытии, но и на дорогах худшего качества;
- модель складная. Схема складывания следующая: кресло снимается (оно не является складным), рама складывается путем простых манипуляций и надежно фиксируется в сложенном виде.

На рисунке ниже представлена схема складывания рамы Pengy.

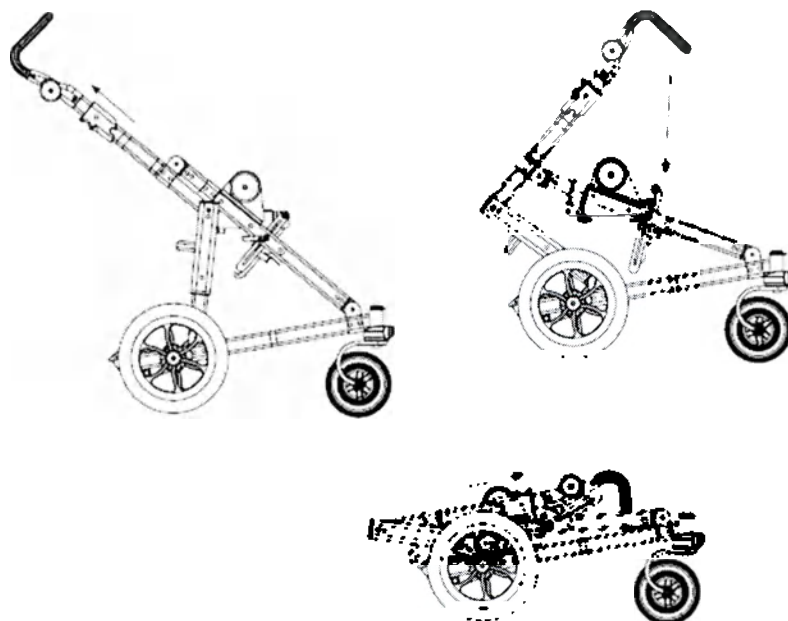

Более подробная инструкция приводится в руководстве по эксплуатации изделия.

Предусмотрены размеры 0, 1, 2 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Zitzi Delfi Pro Guppy



Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Delfi Pro.

Модель складная. Преимущественное назначение – для использования на улице, хотя возможно также использование внутри помещений. Рама может быть оснащена колесами различных размеров и типов, что позволяет удовлетворять различные требования.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Основная отличительная особенность – сбалансированность конструкции, высокая устойчивость рамы.

Предусмотрены размеры 0, 1, 2, 3, 4 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Список принадлежностей к данной модели кресла-коляски Anatomic SITT приводится в Приложении. Описание принадлежностей приводится в данном разделе ниже в пункте «Принадлежности».

Модель Zitzi Delfi Pro Seabass Pro

Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Delfi Pro.

Модель складная. Преимущественное назначение модели – для использования на улице, хотя возможно также и использование внутри помещений. Обладает максимальной грузоподъемностью из моделей данной серии (до 90 кг).



Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Предусмотрены размеры 3, 4 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

2. Кресла-коляски Zitzi Pengy включают в себя следующие модели: **Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy.**

Предназначены для детей и подростков, имеющих нарушение двигательной активности и трудности с сохранением правильного положения тела.

Данные кресла коляски сконструированы на основе сиденья Zitzi Pengy. Описанные ниже модели представляют собой комбинацию сиденья Zitzi Pengy и различных видов рам. Для всех кресел данного варианта исполнения имеются следующие характеристики сиденья.

Сиденье Zitzi Pengy является аналогом сиденья Zitzi Delfi Pro, специально адаптированным для установки на раму Zitzi Pengy. Имеет те же функции, что и Delfi Pro.

Модель Zitzi Pengy Flipper Pro



Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Pengy.

Модель складная. Предназначается для использования внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона и высоты сиденья реализуется с помощью газовой пружины.

Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.


(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности – ориентированность на домашнее использование, возможность регулировки

угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте; возможность приводить раму в самое низкое положение к полу, что позволяет повысить активность пользователя.

Предусмотрен единственный размер (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Zitzi Pengy Flipper Pro Flex

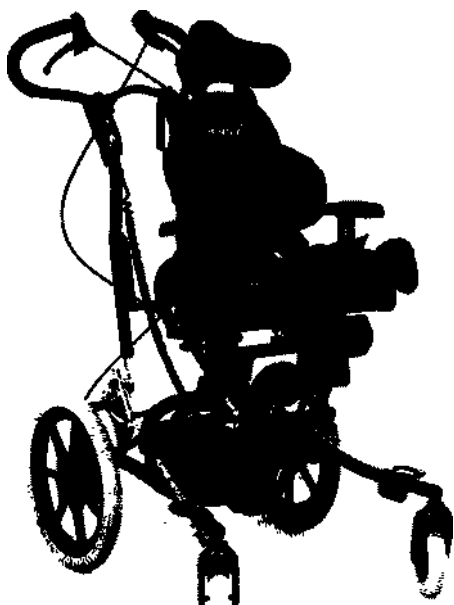

Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Delfi.

Модель нескладная. Предназначается для использования как внутри помещений, так и на улице.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона и высоты сиденья реализуется с помощью газовой пружины.

Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности – возможность оснащения колесами большего диаметра, 30см или 40 см (что делает модель подходящей для уличного использования), возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.

Предусмотрен единственный размер (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Zitzi Pengy Snapper

Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzy Pengy.

Модель нескладная. Конструкция рамы предполагает использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона и высоты сиденья реализуется с помощью газовой пружины.

Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).



Отличительные особенности - компактность рамы, ориентированность на домашнее использование, возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.

Предусмотрен единственный размер (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Zitzi Pengy Pengy



Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Pengy.

Конструкция рамы предполагает преимущественное использование на улицах, хотя использование внутри помещений также возможно.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: глубина, угол наклона, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона сиденья реализуется с помощью газовой пружины.

Угол наклона спинки также регулируется с помощью газовой пружины.

Отличительные особенности модели:

- Рама имеет встроенную динамическую систему подвески, которая обеспечивает плавное передвижение по неровным поверхностям.

- Рама может быть оснащена колесами повышенной проходимости, что делает возможным использование модели не только на твердом, асфальтовом, покрытии, но и на дорогах худшего качества.

- Модель складная. Кресло снимается (оно не является складным), рама складывается путем простых манипуляций и надежно фиксируется в сложенном виде. Иллюстрация схемы складывания приводится в описании модели Zitzi Delfi Pro Pengy выше.

Предусмотрен единственный размер (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

3. Кресла-коляски Zitzi Sharky Pro включают в себя следующие модели: **Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro.**

Предназначены для подростков и взрослых, имеющих нарушение двигательной активности и трудности с сохранением правильного положения тела.

Данные кресла-коляски сконструированы на основе сиденья Zitzi Sharky Pro. Описанные ниже модели представляют собой комбинацию сиденья Zitzi Sharky Pro и различных видов рам.

Модель Zitzi Sharky Pro является аналогом модели Zitzi Delfi Pro, но предназначена для взрослых пользователей.

Кресло оснащено гибкой системой регулировки сиденья и спинки. Сиденье имеет анатомическую форму, что обеспечивает естественное положение таза. Глубина сиденья, аддукция и абдукция регулируются плавно и точно. Глубина сиденья регулируется в соответствии с длиной бедренной части ноги. Предусмотрена регулировка спинки: угла наклона, с помощью газовой пружины. Конструкция спинки позволяет контролировать патологические движения и смягчает последствия повышенного мышечного тонуса. Трехсторонняя боковая поддержка обеспечивает контроль осанки, уменьшает проявление нарушений, позволяет корректировать или компенсировать деформации и поддерживать оптимальное положение тела при сидении.

Кресло оснащено регулируемыми опорами для ног. Позволяет компенсировать разницу в длине ног до 10 см.

Zitzi Sharky Pro Flipper Pro

Предназначается для подростков и взрослых. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Sharky Pro.

Модель нескладная. Предназначается для использования внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция.

Функция «регулировка угла наклона сиденья» позволяет не нарушать баланс и стабильность положения пользователя. Таким образом, центр тяжести не смещается. Регулировка угла наклона сиденья осуществляется с помощью газовой пружины. Также предусмотрена регулировка высоты сиденья с помощью газовой пружины.

Предусмотрена возможность регулировать угол наклона спинки, также с помощью газовой пружины.




(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности – ориентированность на взрослых пользователей, ориентированность на домашнее использование, возможность регулировки угла наклона

кресла и регулировки сиденья по высоте; возможность приводить раму в самое низкое положение к полу, что позволяет повысить активность пользователя.

Предусмотрены размеры 1, 2 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex

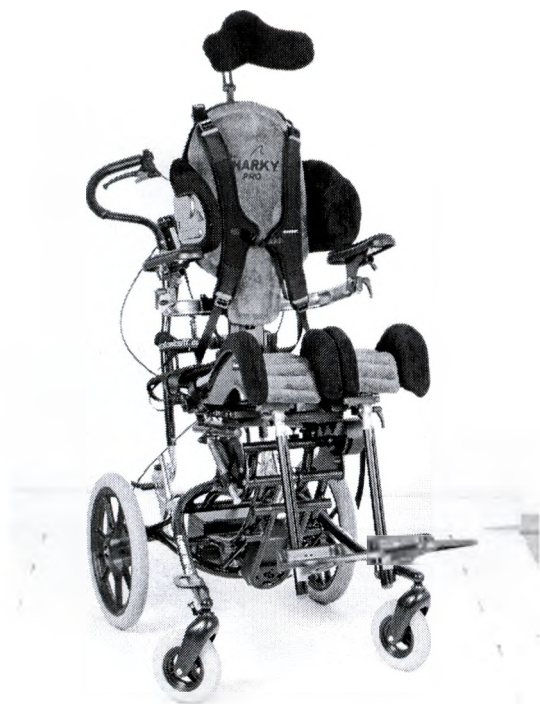

Предназначается для подростков и взрослых. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Sharky Pro.

Модель нескладная. Предназначается для использования внутри как внутри помещений, так и на улице.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона и высоты сиденья реализуется с помощью газовой пружины.

Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности – ориентированность на взрослых пользователей, возможность оснащения колесами большего диаметра, 30см или 40 см (что делает модель подходящей для уличного использования), возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.

Предусмотрены размеры 1, 2 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Zitzi Sharky Pro Snapper



Предназначается для подростков и взрослых. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Sharky Pro.

Модель нескладная. Конструкция рамы предполагает использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона и высоты сиденья реализуется с помощью газовой пружины.


Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности - ориентированность на взрослых пользователей, компактность рамы, ориентированность на домашнее использование, возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.

Предусмотрены размеры 1, 2 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Zitzi Sharky Pro Seabass Pro

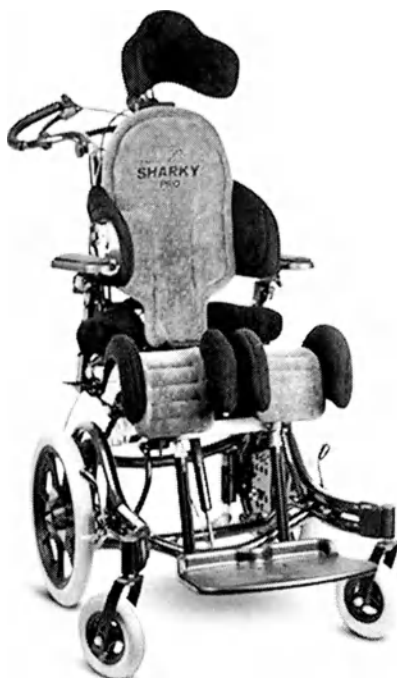

Предназначается для подростков и взрослых. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Sharky Pro.

Модель нескладная. Преимущественное назначение – для использования на улице, хотя возможно также и использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

обладает максимальной грузоподъемностью из моделей данной серии (до 135 кг).

Отличительные особенности: ориентированность на взрослых пользователей, ориентированность на использование на улице;

Предусмотрены размеры 1, 2 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

4. Кресла-коляски Anatomic Sits включают в себя модели Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro.

Предназначены для детей, подростков и взрослых, имеющих нарушение двигательной активности и трудности с сохранением правильного положения тела.

Данные кресла-коляски сконструированы на основе сиденья Anatomic Sits. Описанные ниже модели представляют собой комбинацию сиденья Anatomic Sits и различных видов рам.

Сиденья Anatomic Sits - это кресла, предназначенные главным образом для пользователей с тяжелой степенью двигательных нарушений, повышенным мышечным тонусом. Конструктивные особенности (в частности, форма сиденья, соответствующая контурам тела) позволяют снизить нагрузку на пользователя, обеспечить необходимую поддержку и стабильность положения тела, поддержать симметрию позы.

Модель Anatomic Sits Flipper Pro



Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Sits, описанными ранее.

Модель складная. Предназначается для использования внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона и высота сиденья регулируется с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, ориентированность на домашнее использование, анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя, возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте; возможность приводить раму в самое низкое положение к полу, что позволяет повысить активность пользователя.

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Sits Flipper Pro Flex



Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Sits, описанными ранее.

Модель нескладная.
Предназначается для использования как внутри помещений, так и на улице.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона и высота сиденья регулируются с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя, возможность оснащения колесами большего диаметра, 30см или 40 см (что делает модель подходящей для уличного использования), возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Список принадлежностей к данной модели кресла-коляски Anatomic SITT приводится в Приложении. Описание принадлежностей приводится в данном разделе ниже в пункте «Принадлежности».

Модель Anatomic Sits Snapper

Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Sits, описанными ранее.

Модель нескладная. Конструкция рамы предполагает использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона и высота сиденья регулируются с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).



Отличительные особенности:
ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сидения, соответствующая контурам тела пользователя, компактность рамы, ориентированность на домашнее использование, возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Sits Pengy



Предназначены для детей и подростков. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Sits, описанными ранее.

Конструкция рамы предполагает преимущественное использование на улице, хотя возможно и использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона сиденья реализуется с помощью газовой пружины.

Угол наклона спинки также регулируется с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности модели:

- Ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей,
- Анатомическая форма сидения, соответствующая контурам тела пользователя.
- Рама имеет встроенную динамическую систему подвески, которая обеспечивает плавное передвижение по неровным поверхностям.
- Рама может быть оснащена колесами повышенной проходимости, что делает возможным использование модели не только на твердом, асфальтовом, покрытии, но и на дорогах худшего качества.
- Модель складная. Кресло снимается (оно не является складным), рама складывается путем простых манипуляций и надежно фиксируется в сложенном виде.

Иллюстрация схемы складывания приводится в описании модели Zitzi Delfi Pro Pengy выше.

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Sits Guppy



Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Sits, описанными ранее.

Модель нескладная. Преимущественное назначение – для использования на улице, хотя возможно также использование внутри помещений. Рама может быть оснащена колесами различных размеров и типов, что позволяет удовлетворять различные требования.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона сиденья регулируется с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя, сбалансированность конструкции, высокая устойчивость рамы.

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Sits Seabass Pro



Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Sits, описанными ранее.

Модель нескладная. Преимущественное назначение – для использования на улице, хотя возможно также и использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона сиденья регулируется с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сидения, соответствующая контурам тела пользователя, ориентированность на использование на улице; обладает максимальной грузоподъемностью из моделей данной серии (до 135 кг). Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

5. Кресла-коляски Anatomic Soft Sits включают в себя модели Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro.

Предназначены для детей, подростков и взрослых, имеющих нарушение двигательной активности и трудности с сохранением правильного положения тела.

Данные кресла-коляски сконструированы на основе сиденья Anatomic Soft Sits. Это мягкое анатомическое сиденье, отличительной особенностью которого является наличие пенистого наполнителя, что позволяет эффективно снижать давление на тело пользователя. Описанные ниже модели представляют собой комбинацию сиденья Anatomic Soft Sits и различных видов рам.

Модель Anatomic Soft Sits Flipper Pro



Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Soft Sits, описанными ранее.

Модель складная. Предназначается для использования внутри помещений. Модель складная. Предназначается для использования внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона и высота сиденья регулируются с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, ориентированность на домашнее использование, анатомическая форма сидения, соответствующая контурам тела пользователя, наличие в покрытии сиденья наполнителя, позволяющего снижать давление; возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте; возможность приводить раму в самое низкое положение к полу, что позволяет повысить активность пользователя.

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex

Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Soft Sits, описанными ранее.

Модель складная. Предназначается для использования как внутри помещений, так и на улице.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона и высота сиденья регулируются с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя, наличие в покрытии сиденья наполнителя, позволяющего снижать давление; возможность оснащения колесами большего диаметра, 30см или 40 см (что делает модель подходящей для уличного использования), возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.



Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Soft Sits Snapper

Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Soft Sits, описанными ранее.

Модель складная. Конструкция рамы предполагает использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона и высота сиденья регулируются с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).



Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя, наличие в покрытии сиденья наполнителя, позволяющего снижать давление; компактность рамы, ориентированность на домашнее использование, возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.

Предусмотрены размеры 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Soft Sits Pengy

Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Soft Sits, описанными ранее.

Конструкция рамы предполагает использование как внутри помещений, так и на улицах с твердым дорожным покрытием.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона сиденья реализуется с помощью газовой пружины.

Угол наклона спинки также регулируется с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).



Отличительные особенности модели:

- Ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей.
- Анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя.
- Наличие в покрытии сиденья наполнителя, позволяющего снижать давление.
- Рама имеет встроенную динамическую систему подвески, которая обеспечивает плавное передвижение по неровным поверхностям.
- Рама может быть оснащена колесами повышенной проходимости, что делает возможным использование модели не только на твердом, асфальтовом, покрытии, но и на дорогах худшего качества.
- Модель складная. Кресло снимается (оно не является складным), рама складывается путем простых манипуляций и надежно фиксируется в сложенном виде. Иллюстрация схемы складывания приводится в описании модели Zitzi Delfi Pro Pengy выше.

Предусмотрены размеры 1, 2 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Soft Sits Guppy

Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Soft Sits, описанными ранее.

Модель нескладная.

Преимущественное назначение – для использования на улице, хотя возможно также использование внутри помещений. Рама может быть оснащена колесами различных размеров и типов, что позволяет удовлетворять различные требования.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона сиденья регулируется с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя, наличие в покрытии сиденья наполнителя, позволяющего снижать давление; сбалансированность конструкции, высокая устойчивость рамы.

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).



Модель Anatomic Soft Sits Seabass Pro

Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Soft Sits, описанными ранее.

Модель нескладная. Преимущественное назначение – для использования на улице, хотя возможно также и использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона сиденья регулируется с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).



Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя, наличие в покрытии сиденья наполнителя, позволяющего снижать давление; ориентированность на использование на улице; обладает максимальной грузоподъемностью из моделей данной серии (до 135 кг).

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

6. Кресло-коляска Carseat Pro



Предназначается для детей и подростков, имеющих нарушение двигательной активности и трудности с сохранением правильного положения тела.

Модель складная. Оснащена рамой Pengy. Конструкция рамы предполагает использование как внутри помещений, так и на улицах с твердым дорожным покрытием.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: глубина, угол наклона, абдукция – аддукция.

Угол наклона спинки не регулируется.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности модели:

- ориентированность на детей;
- является удобной для транспортировки на автомобиле, т.к. является складной.

Кресло снимается (оно не является складным), рама складывается путем простых манипуляций и надежно фиксируется в сложенном виде. Иллюстрация схемы складывания приводится в описании модели Zitzi Delfi Pro Pengy выше.

Предусмотрены размеры 1, 2 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Все варианты исполнения МИ «Кресла – коляски Anatomic SITT» имеют принадлежности. Наборы принадлежностей для каждой модели различаются по составу. Общий перечень принадлежностей с их описанием представлен ниже.

Принадлежности


Название	Описание, назначение	Размеры (не более) Масса (не более)	Модели кресел-колясок , с кот. Комплектуются	Фото
Боковая поддержка – это деталь, крепящаяся к спинке кресла, предназначена для фиксирования тела пациента по бокам. Включает: комплект крепежа, подушку, регулируется по ширине и высоте				
1. Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro	Крепится к спинке, поддерживая пациента, и находится в фиксированном положении	Д х Ш х В, масса Размер 1: 12,5 х 8.5 х 17-26 см, 1.2 кг Размер 2, 15х 9.5 х 19-28 см, 1.5, кг Размер 3: 17,5 х 11х 22-31 см, 1.8 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro (для размера 3 также Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro)	
2. Боковая поддержка фиксированная Zitzi Sharky Pro		Д х В , масса Размер 1: 27-35 х 21 см Размер 2: 30-38 х 25 см	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
3. Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro	Крепится к спинке, поддерживая пациента. Может откидываться в сторону, чтобы облегчить выход из коляски	Д х В, масса Размер 1, 17-26 см/12,5 см, 1.2 кг Размер 2, 19-28 см/15 см, 1.5, кг Размер 3, 22-31 см/17,5 см, 1.8 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	

4. Боковая поддержка откидная Zitzi Sharky Pro		Д х В, масса Размер 1 - 27-35 см/21 см, 2 кг Размер 2, 30-38 см/ 25 см, 2.1 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
5. Усиленная основа боковой поддержки Zitzi Sharky Pro	Усиленный крепёж для боковой поддержки	Д х Ш х В, масса Размер 1: 12 х 5 х 12 см, 150 г Размер 2: 12, 5 х 8 х 19 см, 200 г	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
6. Крепеж боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, складной	Крепёж для боковой поддержки, который может откидываться, облегчая выход из коляски.	Д х Ш х В, масса 10 х 5 х 10 см, 150 г	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
Подголовник – это деталь, крепящаяся к верху спинки коляски, предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение пользователя. Включает: 1) пластина подголовника, 2) подушка, 3) опора, 4) держатель				
7. Подголовник Pengy	Предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка/	Д х В, масса Размер 1: 22 х 15 см, 200 г Размер 2: 24 х 19 см, 210 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	
8. Подголовник Zitzi Sharky Pro Standard	Предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка.	Д х В, масса Размер 1 удлинённый: 28х16 см, 220 г Размер 2: 24х19 см, 200 г Размер 2 удлинённый: 28х21 см, 230 г	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
9. Подголовник Pengy удлинённый	Предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка. Имеет более вытянутую в длину форму	Д х В, масса Размер 1: 25 х 16 см, 220 г Размер 2: 27 х 21 см, 230 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	

10. Подголовник Pro Standard	Предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка.	Д х В, масса Размер 1: 22 x 15 см, 1 кг Размер 2: 24 x 19 см, 1.2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
11. Подголовник Pro Standard удлиненный,	Цвета: серый, синий, красный, черный	Д х В, масса Размер 1: 28 x 16 см, 1.4 кг Размер 2: 28 x 21 см, 1.5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
12. Подголовник Pro Mini	Предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка.	Д х В, масса Размер 1: 22 x 14 см, 1.2 кг Размер 2: 25,5 x 16 см, 1.3 кг Размер 3: 33 x 19 см 1.4 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
13. Подголовник Pro Serie Adult	Все подголовники Pro Serie должны быть укомплектованы основой-адаптером и держателем подголовника	В х Д, масса 24 x 37 см, 1.5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
14. Подголовник Pro Serie Adult		В х Д, масса 26 x 32 см, 1.4 кг	Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	

15. Подголовник Pro Junior		В х Д, масса 27 х 35 см, 1.2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
16. Подголовник Pro Junior Anatomic sits		В х Д, масса 29 х 37 см, 1.4 кг	Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
17. Подголовник Pro Single adult, junior		В х Д, масса Взрослый размер: 30 х 37 см, 1.3 кг Детский размер: 24 37 см, 1.2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
18. Подголовник Pro Plush		Длина, масса Размер 1: длина 20 см, 1.2 кг Размер 2: длина 25 см, 1.3 кг Размер 3: длина 35 см, 1.4 кг Размер 4: длина 40 см, 1.5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	


19. Подголовник Pro Plush регулируемый		Д, В, масса Размеры: 1. Низкий: 15-35см, 1.2 кг 2. Стандартный: 20-45, 1.5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
20. Подголовник Black Bear	предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка. Более основательная поддержка.	Д x В, масса размеры: 1.Стандартный: 27 x 26 см, 1.2 кг 2.Удлинённый: 29 x 26 см, 1.25 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
21. Подголовник LINX Plush	предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка	В, масса Размеры: 1: 20 см, 1.2 кг 2: 25 см, 1.3 кг 3: 35 см, 1.4 кг 4. 40 см, 1.5 кг	Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
22. Подголовник LINX Plush регулируемый	предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка, регулируемый	В, масса Размеры: 1.Низкий: 15-35см, 1.2 кг 2.Стандартный: 20-45, 1.5 кг	Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
23. Подголовник Carseat	предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка	В x Д, масса 24 x 43 см, 1,3 кг	Кресло-коляска Carseat Pro	

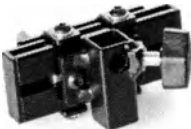24. Подголовник Carseat удлинённый	предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка	В x Д, масса 24x37 см, 1,2 кг	Кресло-коляска Carseat Pro	
25. Регулируемое крепление подголовника	Крепит подголовник в разных плоскостях для удобства пользователя	В x Д, масса 10 x 5 x 3 см, 0.5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
Активная повязка для лба – это повязка, позволяющая фиксировать голову людей со слабыми мышцами шеи от падения вперёд и в стороны.				
26. Активная повязка для лба Zitzi	Опора, оказывающая дополнительную фиксацию головы и шеи по бокам.	В x Д x Ш, масса 2 x 10 x 1 см, 0.2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy,	

			Anatomic Soft Sits Seabass Pro Кресло-коляска Carseat Pro	
27. Активная повязка для лба Junior, Pro Serie	Повязка, которая позволяет фиксировать голову людей со слабыми мышцами шеи. Должна использоваться вместе с опорой.	Д x В x Ш, масса 20 x 5 x 1 см, 0.1 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Carseat Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
28. Активная повязка для лба Adult, Pro Serie	Повязка, которая позволяет фиксировать голову людей со слабыми мышцами шеи. Должна использоваться вместе с опорой.	Д x В x Ш, масса 20 x 5 x 3 см, 0.4 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

29. Крепежный кронштейн для активной повязки для лба	Крепежный кронштейн для плюшевого подголовника, Pro Serie. Не обязателен для подголовников Pro Junior и Pro Single.	В x Д x Ш, масса 5 x 10 x 1 см, 0.3 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
30. Крепление для подголовника	Съёмное крепление. С помощью него подголовник крепится к спинке кресла.	В x Д x Ш, масса 6 x 6 x 1 см, 0.2 кг	Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
31. Крепление для подголовника Anatomic sits	Устройство, позволяющее крепить подголовник в спинке кресла.	Д x Ш x В, масса 5 x 5 x 5 см, 0.3 кг	Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
32. Верхний крепежный кронштейн, удлиненный	Предназначен для верхнего крепления ремней	Д x В x Ш, масса 12 x 5 x 0.5, 0.2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Carseat Pro	
33. Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro	Крепится к модулю сиденья. Нижний крепежный кронштейн для ремня идет в стандартной комплектации	В x Д x Ш, масса 4 x 5 x 0.5, 0.2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	

34. Нижний крепежный кронштейн	Предназначен для нижнего крепления ремней	В x Д x Ш, масса 4 x 5 x 0.5, 0.2 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, кресло-коляска Carseat Pro	
35. Грудной ремень Х-образный Pro	Даёт усиленную поддержку грудной клетке. Предотвращает выпадение из коляски	Ш x Д, масса Размер 1 (XS): 20x26 см, 200 г Размер 2 (S): 21X31 см, 200 г Размер 3(M): 25X37 см, 200 г Размер 4 (L): 33X50 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Carseat Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
36. Грудной ремень Х-образный Exclusive	Даёт усиленную поддержку грудной клетке. Предотвращает выпадение из коляски.	Ш x Д, масса Размер 1 (XS): 20x26 см, 200 г Размер 2 (S): 21X31 см, 200 г Размер 3(M): 25X37 см, 200 г Размер 4 (L): 33X50 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Carseat Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi	

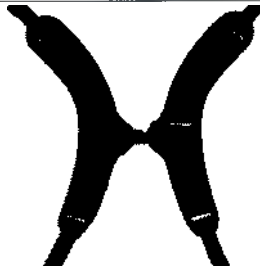			Pengy Pengy, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
37. Грудной ремень Н-образный Pro	Обеспечивает поддержку для торса и плеч. Он эффективно предотвращает вращение. Так же подходит для пользователей, у которых спереди на одежде пуговицы.	Размер одной половины – Ш х Д, масса: Размер 1 (XS): 8,5x19,5 см, 200 г Размер 2 (S): 10x31,5 см, 200 г Размер 3 (M): 11,5x39,5 см, 200 г Размер 4 (L): 11,5x46 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

38. Грудной ремень H-образный Exclusive	Обеспечивает поддержку для торса и плеч. Он эффективно предотвращает вращение. Так же подходит для пользователей, у которых спереди на одежде пуговицы.	Размер одной половины – Ш x Д, масса: Размер 1 (XS): 8,5x19,5 см, 200 г Размер 2 (S): 10x31,5 см, 200 г Размер 3 (M): 11,5x39,5 см, 200 г Размер 4 (L): 11,5x46 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
39. Грудной ремень Zitzi Delfi Pro	Фиксирует корпус пациента в области груди. Поставляются без креплений, поэтому вам стоит дополнить их нижними и верхними крепежными кронштейнами	Д x В x Ш, масса 30 x 6 x 1 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
40. Грудной ремень Soft Pro	Фиксирует корпус пациента в области груди. Поставляются без креплений, поэтому вам стоит дополнить их нижними и верхними крепежными кронштейнами	Д x В x Ш, масса Размер 1 (детский): 20 x 6 x 1, 200 г Размер 2 (взрослый): 40 x 6 x 1, 250 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass	

			Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
Бедренные ремни предназначены для правильного позиционирования и фиксации ребёнка в области бёдер, предотвращая соскальзывание корпуса с коляски.				
41. Бедренный ремень Pro	С двумя точками крепления на каждой стороне, ремень стабилизирует таз и бедренные кости в правильном положении, соответственно сокращая сдвиг и ненужное давление на копчик и кости.	Д x Ш, масса Размер 1 (XS): 25 x 6 см, 200 г Размер 2 (S): 30 x 6 см, 200 г Размер 3 (M): 35 x 6 см, 200 г Размер 4 (L): 40 x 6 см, 200 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

42. Бедренный ремень Comfort Pro	С одной точкой крепления на каждой стороне, ремень стабилизирует таз и бедренные кости в правильном положении, соответственно сокращая сдвиг и ненужное давление на копчик и кости	Д х Ш, масса Размер 1(S): 30х6 см, 250 г Размер 2 (M): 35х6 см, 200 г Размер 3 (L): 40х6 см, 200 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
43. Бедренный ремень Exclusive	с двумя точками крепления на каждой стороне, ремень стабилизирует таз и бедренные кости в правильном положении, соответственно сокращая сдвиг и ненужное давление на копчик и кости. Из ткани Exclusive	Д х Ш, масса Размер 1(S): 30х6 см, 200 г Размер 2 (M): 35х6 см, 200 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass	

			Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
44. Бедренный антиротационный ремень	с двумя точками крепления на каждой стороне, ремень стабилизирует таз и бедренные кости в правильном положении, соответственно сокращая сдвиг и ненужное давление на копчик и кости. Предотвращает перекручивание.	Д х Ш, масса Размер 1 (XS): 25 х 6 см, 200 г Размер 2 (S): 30 х 6 см, 200 г Размер 3 (M): 35 х 6 см, 200 г Размер 4 (L): 40 х 6 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
45. Фиксатор голеностопа Exclusive	Фиксирует и крепит голеностоп к коляске (на липучках)	Размер 1 (S): длина не более 30 см (обхват голеностопа 16-24 см), 300 г Размер 2 (M): длина не более 35 см (обхват голеностопа 22-28 см), 300 г Размер 3 (L): длина не более 40 см (обхват голеностопа 26-32 см), 300 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex,	

			Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
46. Фиксатор голеностопа Soft	Фиксирует и крепит голеностоп к коляске (на липучках)	Размер 1 (S): длина не более 30 см (обхват голеностопа 16-24 см), 300 г Размер 2 (M): длина не более 35 см (обхват голеностопа 22-28 см), 300 г Размер 3 (L): длина не более 40 см (обхват голеностопа 26-32 см), 300 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
47. Фиксатор голеностопа Pro	Фиксирует и крепит голеностоп к коляске(с пряжкой)	Размер 1 (S): длина не более 30 см (обхват голеностопа 16-24 см), 300 г Размер 2 (M): длина не более 35 см (обхват голеностопа 22-28 см), 300 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	



		Размер 3 (L): длина не более 40 см (обхват голеностопа 26-32 см), 300 г	Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
48. Ремень для ступней	Крепится к подножке и позволяет зафиксировать ступню	Размер 1 (S): длина не более 52 см, 300 г Размер 2 (L): длина не более 70 см, 300 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
49. Поддержка таза	Опция, необходимая для правильного позиционирования таза пользователя	Д x В x Ш, масса Размер 1 (S): 25 x 8 x 1 см, 300 г Размер 2 (L): 30 x 8 x 1 см, 300 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Carseat Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	

50. Фиксатор кисти Exclusive	Помогает зафиксировать какой-то предмет в ладони пациента	Размер 1 (S): длина ладони 0-10 см Размер 2 (M): длина ладони 10- 15 см Размер 3 (L): длина ладони 16- 22 см	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
51. Браслет	Фиксирует и крепит запястье к коляске. Браслеты поставляются парно	Ш x Д, масса Размер 1 (S) - 5x16 см, 300 г Размер 2 (L) - 5x20 см, 300 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass	

			Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
52. Браслет Soft	Фиксирует и крепит запястье к коляске. Браслеты поставляются попарно	Ш x Д, масса Размер 1 (S) - 5x16 см, 300 г Размер 2 (L) - 5x20 см, 300 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
53. Ремни для ног	Фиксируют и крепят ногу к коляске	Д x В x Ш, масса Размер 1(S): 15 x 5 x 1, 200 г Размер 2 (L): 19 x 5 x 1, 200 г	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
Подлокотник – это ручка у кресла, предназначена для опоры локтя.				

54. Подлокотник	Крепится к сиденью – на платформу сиденья рамы. Поставляется попарно	Д х Ш х В, масса Размер 1: 18х6,6х14-20,5; 300 г Размер 2: 19,5х7,5х14-20,5; 300 г Размер 3: 23х9х19-28; 300 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
55. Подлокотник Guppy	Два подлокотника, соединенные в одну систему. Крепятся к раме	Д х Ш х В, масса 40 х 15 х 10 см, 4 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
56. Подлокотник Zitzi Sharky Pro	Крепится к сиденью. Регулируется в трёх направлениях. Поставляется попарно	Д х Ш, масса Размер 1: 26,5 х 9,5 см, 5 кг Размер 2: 30,5 х 9,5 см, 5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
57. Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный	Крепится к спинке.	Д х Ш, масса Размер 1: 26,5 х 9,5 см, 5 кг Размер 2: 30,5 х 9,5 см, 5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	 
58. Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной	Позволяет отводить подлокотник в сторону для более комфортного выхода	Д х Ш, масса Размер 1: 26,5 х 9,5 см, 5 кг Размер 2: 30,5 х 9,5 см, 5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	 

	из коляски. Крепится к спинке.		Pro Seabass Pro	
59. Опора для предплечья	Создаёт дополнительную опору для пациента в районе предплечья.	В x Д x Ш, масса 12 x 15 x 1 см, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
60. Покрытие опоры для предплечья	Мягкие накладки из ткани на опору для предплечья	Д x В x Ш, масса 12 x 15 x 1 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
61. Подлокотная опора	Мягкие накладки на подлокотник.	Д x В x Ш, масса Размер 1: 20 x 5 x 2 см, 200 г Размер 2: 22 x 5 x 2 см, 200 г Размер 3: 24 x 5 x 2 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
62. Крепежи опоры для предплечья левый/правый	Правый и левый. Крепит опору для предплечья к спинке коляски	Д x В x Ш, масса 15 x 5 x 1 см, 500 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	

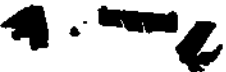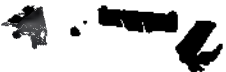			Pro	
63. Крепеж подлокотника Guppy	Деталь подлокотника (без боковых накладок), которая крепится к спинке.	Д х В х Ш, масса 15 х 8 х 5 см, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
64. Крепеж подлокотника складной	Крепится к спинке. Может откидываться в сторону, для облегчения выхода из коляски.	Д х Ш х В, масса 30 х 8 х 15 см, 3,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
65. Крепеж подлокотника фиксированный	Крепится к спинке.	Д х Ш х В, масса 30 х 8 х 15 см, 3,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
66. Крепежи подлокотника, правый / левый	Крепят подлокотник к коляске. (крепится к сиденью)	Д х Ш х В, масса 35 х 8 х 15 см, 4 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
67. Столик Zitzi Delfi Pro	Предназначен для различных занятий и кормления пользователя. Позволяет пользователю размещать на нём какие-либо предметы. Изготовлен из легко моющегося пластика.	Д х Ш, масса Размер 1: 47,5х44 см, 1,2 кг Размер 2: 53,5х50 см, 1,2 кг Размер 3: 53,5х51 см, 1,3 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
68. Столик Zitzi Sharky Pro		Д х Ш, масса Размер 1: 67х60 см, 1,5 кг Размер 2: 67х65 см, 1,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	

69. Столик откидной Zitzi Delfi Pro	Предназначен для различных занятий и кормления пациента. Позволяет пользователю размещать на нём какие-либо предметы. Изготовлен из легко моющегося пластика. Откидывается.	Д х Ш, масса Размер 2: 53,5x50 см, 1,2 кг Размер 3: 53,5x51 см, 1,3 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
70. Столик откидной Zitzi Sharky Pro		Д х Ш, масса Размер 1: 67x60 см, 1,5 кг Размер 2: 67x65 см, 1,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
71. Столик с усилен. крепежами Zitzi Delfi Pro	Предназначен для удобства игры и кормления пациента. Позволяет пользователю размещать на нём какие-либо предметы. Изготовлен из легко моющегося пластика. Способен выдерживать более сильные загрузки.	Д х Ш, масса Размер 2: 53,5x50 см, 1,2 кг Размер 3: 53,5x51 см, 1,3 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
72. Столик с усилен. крепежами Zitzi Sharky Pro		Д х Ш, масса Размер 1: 67x60 см, 1,5 кг Размер 2: 67x65 см, 1,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
73. Защитное покрытие на столик	Защищает столик от царапин	В х Д х Ш, масса Размер 1: 60x50 см, 0,2кг Размер 2: 66x56 см, 0,3кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	

74. Крепеж столика. складной	Крепеж для откидного столика	Д х Ш, масса Размер 1: 50x10 см, 1,5 кг Размер 2: 60x10 см, 1,8 кг	, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
75. Крепеж столика усиленный, складной	Усиленный крепеж для откидного столика	Д х Ш, масса 50x40 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
76. Запорные устройства для столика, правое и левое	Предназначена для укрепления столика	12x5x1 см, 0,5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
77. Столик Carseat Pro	Предназначен для удобства игры и кормления пациента. Позволяет ребенку размещать на нём какие-либо предметы.	Д х Ш х В, масса 15x5x1 см, 0,2 кг	Carseat Pro	


78. Столик Pengy	Предназначен для удобства игры и кормления пациента. Позволяет ребенку размещать на нём какие-либо предметы. Изготовлен из легко моющегося пластика.	Д х Ш, масса 35x25, 3 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	
79. Подножка Carseat Pro	Устройство для поддержки ног. С единой базой.	Д х Ш, масса 30x20 см, 0,2 кг	Carseat Pro	
80. Единая подножка Zitzi Delfi Pro	Устройство для поддержки ног. С единой базой.	Д х Ш, масса Размер 1: 31,5x19,5 см, 1 кг Размер 2: 34,5x22,5 см, 1 кг Размер 3: 38x26 см, 1 кг	, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
81. Единая подножка Pengy	Устройство для поддержки ног. С единой базой.	Д х Ш, масса 25x20см, 1 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	

82. Единая подножка Seabass Pro	Устройство для поддержки ног. С единой базой.	Д х Ш, масса Размер 1, 2 30x20см, 1,5 кг Размер 3: 30x20см, 2кг	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
83. Платформа для ног	Устройство для поддержки ног. С единой базой. Подъемная.	Д х Ш, масса Размер 1: 28 x19 см, 1,5 кг Размер 2: 32 x22 см, 1,6 кг	Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, , Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy	
84. Регулируемая единая подножка	Устройство для поддержки ног. С единой базой. Регулируется в разных направлениях.	Д х Ш, масса Размер 1: 25x18 см, 1,5 кг Размер 2: 25x19 см, 1,8 кг Размер 3: 25x20 см, 1,8 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
85. Откидная единая подножка	Устройство для поддержки ног. С единой базой. Может откидываться кверху.	Д х Ш, масса Размер 1: 25x18 см, 1,8 кг Размер 2: 25x19 см, 1,9 кг Размер 3: 25x20 см, 1,9 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits	

			Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
86. Откидная единая подножка Seabass Pro	Устройство для поддержки ног. С единой базой. Может откидываться кверху.	Д х Ш, масса Размер 1: 25x18 см, 1,9 кг Размер 2: 25x19 см, 2 кг Размер 3: 25x20 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
87. Раздельные подножки	Устройство для поддержки ног. С раздельными основаниями для ступней.	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5x19 см, 1,5 кг Размер 2: 16x22 см, 1,6 кг Размер 3: 18x22,5 см, 1,7 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
88. Раздельные подножки Seabass Pro	Устройство для поддержки ног. С раздельными основаниями для ступней.	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5x19 см, 1,5 кг Размер 2: 16x22 см, 1,6 кг Размер 3: 18x22,5 см, 1,7 кг	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
89. Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro	Устройство для поддержки ног. С раздельными основаниями для ступней.	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5x19 см, 1,5 кг Размер 2: 16x22 см, 1,6 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	


90. Регулируемые раздельные подножки	Устройство для поддержки ног. С раздельными основаниями для ступней. Могут регулироваться в различных направлениях.	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5x19 см, 1,5 кг Размер 2: 16x22 см, 1,6 кг Размер 3: 18x22,5 см, 1,7 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
91. Откидные раздельные подножки	Устройство для поддержки ног. С раздельными основаниями для ступней. Могут откидываться вверх.	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5x19 см, 1,5 кг Размер 2: 16x22 см, 1,6 кг Размер 3: 18x22,5 см, 1,7 кг	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
92. Откидные регулируемые подножки	Устройство для поддержки ног. С раздельными основаниями для ступней. Могут регулироваться в различных направлениях и откидываться вверх.	Д х Ш, масса Размер 1: 25x18 см, 1,8 кг Размер 2: 25x19 см, 1,9 кг Размер 3: 25x20 см, 1,9 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
93. Подушка для единой подножки	Является смягчающей накладкой на подножку для большего комфорта.	Д х Ш, масса Размер 1: 15x10 см, 0,2 кг Размер 2: 18x10 см, 0,2 кг Размер 3: 19x10 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

94. Подушка для раздельных подножек	Является смягчающими накладками на подножки для большого комфорта.	Д х Ш, масса Размер 1: 20x10 см, 0,2 кг Размер 2: 22x10 см, 0,2 кг Размер 3: 24x10 см. 0.2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
95. Адаптер для подвижной подножки	Подходит как для единой, так и для раздельных подножек. Не совместим с опорой для икр и высокими бортиками подножки	В х Д х Ш, масса 15x4x4 см, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

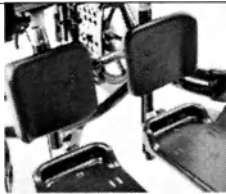96. Опора для икр, с одним держателем	Поддерживает ноги пациента в области икр. 1 держатель	Ш х Д, масса Размер 0: 9,5x11 см, 0,2 кг Размер 1: 12x14,5 см, 0,2 кг Размер 2: 15x16 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
97. Опора для икр, с двумя держателями	Поддерживает ноги пациента в области икр. 2 держателя	Ш х Д, масса Размер 1: 12x14,5 см, 0,2 кг Размер 2: 15x16 см, 0,2 кг Размер 3: 16x22,5 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
98. Опора для икр Pengy	Поддерживает ноги пациента в области икр.	Ш х Д, масса 12x14,5 см, 0,2 кг	Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Pengy, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Pengy	

99. Подушка для опоры для икр		Д х Ш, масса Размер 1: 16x10 см, 0,2 кг Размер 2: 15x10 см, 0,2 кг Размер 3: 16x10 см, 0,2 кг Размер 4: 16x10 см, 0,2 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
100. Пластиковая часть опоры бедра усиленная, правая и левая	Поддерживают ноги пациента в области нижней части бедра. Рассчитана на более сильную нагрузку	Д х Ш, масса Размер 1: 15x10 см, 0,6 кг Размер 2: 19x10 см, 0,6 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
101. Пластиковая часть опоры бедра, правая и левая	Поддерживают ноги пациента в области нижней части бедра	Д х Ш, масса Размер 1: 16x10 см, 0,6 кг Размер 2: 20x10 см, 0,6 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
102. Пластиковая часть опоры бедра, медиально/латеро	Поддерживают ноги пациента в области нижней части бедра. Могут регулироваться по высоте	Д х Ш х В, масса Размер 1: 25x12x13 см, 0,5 кг Размер 2: 30x12x13 см, 0,5 кг Размер 3: 35x12x13 см, 0,5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	

льно +4см	внешнего и внутреннего края.			
103. Опора бедра, медиально/латерально +4 см	Поддерживают ноги пациента в области нижней части бедра. Могут регулироваться по высоте внешнего и внутреннего края. Включает в себя покрытие	Д х Ш х В, масса Размер 1: 25х12х13 см, 0,6 кг Размер 2: 30х12х13 см, 0,6 кг Размер 3: 35х12х13 см, 0,6 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
104. Покрытие опоры бедра	Мягкие накладки, которые надеваются на опоры бедра	Д х Ш х В, масса Размер 1: 10х6х3 см, 0,1 кг Размер 2: 12х6х3 см, 0,1 кг Размер 3: 13х6х3 см, 0,1 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
105. Покрытие опоры бедра Zitzi Sharky Pro	Мягкие накладки, которые надеваются на опоры бедра	Д х Ш х В, масса Размер 1: 15х6х3 см, 0,1 кг Размер 2: 17х6х3 см, 0,1 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
106. Опора для стопы, правая / левая	Пластины отдельных подножек (пара)	Д х Ш х В, масса Размер 3: 14х12х3 см, 0,5 кг Размер 4: 16х12х3 см, 0,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
107. Крепеж подножек	Крепят подножки к креслу	Д х Ш х В, масса 10х5х3 см, 0,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	

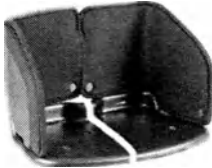108. Высокие бортики для подножек	Предотвращают соскальзывание ступней назад или в бок. Обязательно комплектуется подножкой	Размеры, вес Размер 1: 25x34x5 мм, 1 кг Размер 2: 30x34x5 мм, 1 кг Размер 3: 35x34x5 мм, 1 кг Размер 4: 40x34x5 мм, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
109. Высокие бортики для раздельных подножек	Предотвращают соскальзывание ступней назад или в бок. Обязательно комплектуется подножкой	Размеры, вес Размер 1: 25x17x5 мм, 1 кг Размер 2: 30x17x5 мм, 1 кг Размер 3: 35x17x5 мм, 1 кг Размер 4: 40x17x5 мм, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
110. Подножка МН	Служит для крепления подножки к коляске	Д x Ш x В, масса 14x6x2 см, 0,2 кг	Zitzi Pengy Pengy, Zitzi Delfi Pro Pengy, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Pengy	

111. Непромокаемое покрытие	Покрытие для сиденья коляски, непромокаемое	Ш х Д х В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
112. Подушка сиденья	Обивка сиденья. Цвета: серый, синий, красный	Ш х Д х В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг	Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
113. Подушка сиденья T-foam	Обивка сиденья с наполнителем T-foam. Серая.	Ш х Д х В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
114. Подушка сиденья Coolmax	Обивка сиденья Coolmax. Цвета: черный, синий, оранжевый	Ш х Д х В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	
115. Подушка сиденья Zitzi Sharky Pro	Обивка сиденья.	Ш х Д х В, масса Размер 1: 40x60x1 см, 0,5 кг Размер 2: 50x70x1 см, 0,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	

116. Подушка сиденья Алькантара	Обивка сиденья. Чёрная, синяя, серая.	Ш х Д х В, масса Размер 1: 30х40х1 см, 0,2 кг Размер 2: 35х45х1 см, 0,2 кг Размер 3: 40х50х1 см, 0,2 кг	Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
117. Пластина адаптера	Позволяет установить кресло на пластину адаптера, установленную на раму. Усиленная.	Ш х Д х В, масса Размер 1: 25х25х2 см, 2 кг Размер 2: 30х30х2 см, 3 кг Размер 3: 35х35х2 см, 3,5 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
118. Пластина адаптера Zitzi Sharky Pro	Пластина адаптера с внутренней резьбой. Позволяет установить кресло Zitzi Sharky Pro на универсальную пластину адаптера, установленную на раму.	Д х Ш х В, масса 35х30х8 см, 1 кг	, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	

119. Пластина адаптера с внешней резьбой	Пластина адаптера с внешней резьбой. Подходит для всех рам. В комбинации с пластинами адаптера для Delfi Pro и Sharky позволяет установить соответствующие кресла на любые рамы.	Д х Ш х В, масса 10x10x3 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
120. Адаптер сиденья	Позволяет установить кресло Zitzi Delfi Pro на раму Guppy, Seabass Pro и Flipper Pro.	Д х Ш х В, масса Размер 1: 23x23x1 см, 1 кг Размер 2: 25x25x1 см, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
121. Адаптер сиденья	Позволяет установить кресла Zitzi Delfi Pro, Anatomic Sits, Anatomic Soft Sits на любую раму (с пластинами адаптера с внутренней и внешней резьбой)	Д х Ш х В, масса 30x30x2 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
122. Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro	Позволяет установить кресло Delfi Pro на различные рамы.	Д х Ш х В, масса 30x30x2 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	

123. Адаптер сиденья универсальный	Позволяет установить кресла на любую раму.	Д x Ш x В, масса 30x30x2 см, 2 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
124. Адаптер сиденья Carseat Pro	Позволяет установить кресло Carseat Pro на любую раму.	Д x Ш x В, масса 35x30x10 см, 1,5 кг	Carseat Pro	
125. Базовая платформа адаптера Pengy	Платформа для установки кресла Pengy на раму	Д x Ш x В, масса 35x30x5 см, 1 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	

126. Зимний мешок	Термо-мешок для холодной погоды. Может быть в двух вариантах – со спинкой и без. Имеет спереди застёжку для удобства.	Д x Ш x В, масса Размер 1: 100x30x2 см, 0,5 кг Размер 2: 110x40x2 см, 0,5 кг Размер 3: 120x45x2 см, 0,5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
127. Мобиль	Крепится к спинке коляски и позволяет подвешивать игрушки (игрушки в комплект не входят)	Ш x Д, масса 40x50 см, 0,5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
128. Капюшон	Крепится к спинке коляски. Служит для защиты от дождя и солнца.	В x Д x Ш, масса 40x50x20 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
129. Капюшон Pengy	Крепится к спинке коляски. Служит для защиты от дождя и солнца.	В x Д x Ш, масса 100x50x80 см, 2 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	


130. Газовая пружина	Служит для откидывания и динамической поддержки спинки или для изменения угла наклона сиденья. Производитель "Aratron" (Швеция)	Длина, мм, сила, Н, масса: 185мм, 200 Н, 1 кг 205мм, 300 Н, 1 кг 185мм, 500 Н, 1 кг 365 мм, 200 Н, 1 кг 380 мм, 800 Н, 1 кг 380 мм, 1200 Н, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
131. Ручка для толкания	Служит для толкания коляски	Размеры, масса Размер 1: 40x20x4 см, 2 кг Размер 2: 45x25x4 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, , Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper	

132. Ручка для сопровождающего лица	Служит для управления коляской сопровождающим лицом	Размеры, масса 50x30x4 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex	
133. Ручка для сопровождающего лица	Служит для управления коляской сопровождающим лицом (для установке на раме)	Размеры, масса 50x25x4 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro	
134. Ручка для сопровождающего лица	Служит для управления коляской сопровождающим лицом (для установки под сиденьем)	Размеры, масса 50x30x4 см, 2 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

135. Ручка для сопровождающего лица	Служит для управления коляской сопровождающим лицом	Размеры, масса 40x30x4 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
136. Ручки для сопровождающего лица Seabass Pro	Служат для управления коляской сопровождающим лицом. Раздельные. Могут быть регулируемыми и складными.	Размеры, масса 50x3x3 см, 0,5 кг	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
137. Ручка М6х25	Барашковый винт. Служит для закрепления каких-либо деталей	Д x Ш x В, масса 4x4x4 см, 0,2 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
138. Педаль (для регулировки высоты)	Позволяет регулировать высоту сиденья	Д x Ш x В, масса 15x7x5 см, 0,5 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex	
139. Набор кронштейнов для транспортировки	Состоит из ручек и крепежей, которые облегчают транспортировку коляску с пациентом (перенос через препятствие, занос в общественный	Д x Ш x В, масса 15x15x5 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

	транспорт)			
140. Ручка откидывания	Служит для откидывания спинки.	Д х Ш х В, масса 20х3х2 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
141. Петля для регулировки наклона сиденья	Крепится к сиденью с помощью липучки. Если потянуть за петлю, будет регулироваться наклон сиденья.	Д х Ш х В, масса Размер 1: 15х2х2 см, 0,1 кг Размер 2: 20х2х2 см, 01, кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
142. Передние колеса цельнолитые Pengy	Могут устанавливаться вместо стандартных (обладают повышенной проходимостью. Подходят для зимы и бездорожья)	Диаметр 20 см, 30 см, масса 1 кг	Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Pengy, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Pengy	
143. Передние колеса цельнолитые Seabass Pro	Передние колёса коляски, цельнолитые	Диаметр 15 см, 18 см, масса 1 кг	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
144. Передние колеса цельнолитые Guppy	Передние колёса коляски, цельнолитые	Диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см, масса 1,2 кг	Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, r, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy	
145. Передние колеса пневматические, 18 см	Передние колеса пневматические	Диаметр 18 см, масса 1 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft	

146. Задние колеса цельнолитые Flipper Pro Flex	Задние колеса цельнолитые	Диаметр 30 см, масса 1,2 кг Диаметр 40 см, масса 1,3 кг	Sits Seabass Pro Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex	
147. Задние колеса цельнолитые	Задние колеса цельнолитые	Диаметр 30 см, масса 1,2 кг Диаметр 40 см, масса 1,3 кг Диаметр 50 см, масса 1,4 кг Диаметр 55 см, масса 1,5 кг Диаметр 60 см, масса 1,6 кг	Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
148. Задние колеса пневматические	Задние колеса пневматические	Диаметр 30 см, масса 1,2 кг Диаметр 40 см, масса 1,3 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
149. Задние колеса пневматические Guppy, 40 см	Задние колеса пневматические	Диаметр 40 см, масса 1,3 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	

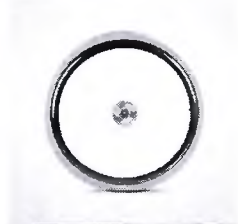150. Задние колеса пневматические Guppy	Задние колеса пневматические	Диаметр 50 см, масса 1,4 кг Диаметр 55 см, масса 1,5 кг Диаметр 60 см, масса 1,6 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
151. Антипрокидыватель Guppy	Предотвращает опрокидывание коляски назад.	В x Д x Ш, масса 20x15x15 см, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
152. Антипрокидыватель правый/левый	Предотвращает опрокидывание коляски назад.	В x Д x Ш, масса 20x15x3 см, 1 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
153. Защита спиц	Предотвращает попадание пальцев в спицы колёс. Диаметр 50 см, 55 см, 60 см	Диаметр, масса: 40 см, 0,2 кг 42 см, 0,2 кг 50 см, 0,3 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
154. Брызговик	Защищает пользователя от брызг Для колёс диаметром 50 см, 55 см, 60 см	Д x Ш x В, масса 40x5x10 см, 0,5 кг 45x5x10 см, 0,5 кг 50x5x10 см, 0,6 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

155. Вилка переднего колеса	Крепит колесо к коляске	В х Д х Ш, масса 8х10х5 см, 0,5 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
156. Ось быстросъемного колеса	Служит основой для надевания колеса.	Размер 1: для колеса диаметром 30/40 см, Д х Ш - 98х12мм, масса 0,1 кг Размер 2: для колеса диаметром 50/60 см, Д х Ш - 103х12мм, масса 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
157. Барабанный тормоз (правый и левый)	Используется для торможения коляски сопровождающим лицом.	Размер 1: для колеса диаметром 30/40 см, Д х Ш - 10х50 мм, масса 1 кг Размер 2: для колеса диаметром 50/60 см, Д х Ш - 12х53 мм, масса 1,3 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
158. Крепеж брызговиков	Помогает закрепить брызговики на колёсах	Д х Ш х В, масса Размер 1: для колес 50 см - 20х15х0,5 см, 1 кг Размер 2: для колес 55 см - 25х20х0,5 см, 1,1 кг Размер 3: для колес 60 см - 30х20х0,5 см, 1,2 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
159. Ручка тормоза с красным стопорным механизмом	При нажатии на рычаг ручки происходит торможение коляски	Д х Ш х В, масса 15х7х2 см, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

160. Трос ручного тормоза	Управляет колодками барабанного тормоза	Размеры, масса Seabass: 105/123 см, 0,2 кг Guppy: 125/143 см, 0,3 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
161. Стояночные тормоза	Стандартные и удлинённые. Жёстко фиксирует колёса коляски, чтобы она не могла ехать. Необходимо укомплектовать их с креплениями	Д x Ш x В, масса 12x7x4 см, 0,1 кг 15x7x4 см, 0,1 кг 30x4x4 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
162. Педаль тормоза Pengy, пластиковая	Фиксирует задние колёса небольшого диаметра.	Д x Ш x В, масса 9x6x1 см, 0,1 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro	
163. Крепление для стояночного тормоза для колёс	Крепит стояночный тормоз к коляске	Д x Ш x В, масса Размер 1: для колёс 30/40 см - 14x3x3 см, 0,2 кг Размер 2: для колёс 40 см - 20x4x3 см, 0,3 кг Размер 3: для колёс 50/60 см - 22x4x3 см, 0,3 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
164. Зубчатая муфта	Фиксирует ручку для толкания в нужном положении	Д x Ш x В, масса 6x1x1 см, 0,1 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
165. Клин	Для подкладывания под подушку сиденья для изменения угла наклона	Д x Ш x В, масса 35x15x5 см, 0,1 кг	Carseat Pro	

166. Профиль спинки	Основание спинки, к которому крепится пластиковая часть и которое крепится к сиденью.	Ш х Д х В, масса 8х70х1,5 см, 1 кг 8х75х1,5 см, 1,2 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
167. Пластиковая часть спинки	Крепится к основанию спинки.	Ш х Д х В, масса 40х60х3 см, 1 кг 50х70х3 см, 1,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
168. Подушка спинки Zitzi Delfi Pro	Покрытие, которое надевается на пластиковую часть спинки. Цвета: серый, синий, красный	Ш х Д, масса Размер 1: 40х60 см, 0,5 кг Размер 2: 50х70 см, 0,5 кг Размер 3: 25х40 см, 0,2 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
169. Подушка спинки Carseat Pro	Покрытие, которое надевается на пластиковую часть спинки. Цвета: серый, синий, красный	Ш х Д, масса Размер 2: 25х40 см, 0,2 кг Размер 3: 25х50 см, 0,2 кг	Carseat Pro	

170. Подушка спинки Coolmax	Покрытие Coolmax, которое надевается на пластиковую часть спинки. Цвета: черный, синий, оранжевый	Ш х Д, масса 25х35 см, 0,2 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	
171. Подушка спинки Zitzi Sharky Pro	Покрытие, которое надевается на пластиковую часть спинки. Цвета: серый, синий, красный	Ш х Д, масса Размер 1: 40х60 см, 0,2 кг Размер 2: 45х70 см, 0,2 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
172. Подушка спинки из Алькантары Zitzi Delfi Pro	Покрытие, которое надевается на пластиковую часть спинки. Цвета: черный, синий	Ш х Д, масса Размер 1: 40х60 см, 0,5 кг Размер 2: 50х70 см, 0,5 кг Размер 3: 25х40 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
173. Подушка спинки из Алькантары Carseat Pro	Покрытие, которое надевается на пластиковую часть спинки.	Ш х Д, масса Размер 2: 25х40 см, 0,2 кг Размер 3: 25х50 см, 0,2 кг	Carseat Pro	
174. Подушка спинки из Алькантары Zitzi Sharky Pro	Покрытие, которое надевается на пластиковую часть спинки.	Ш х Д, масса Размер 1: 40х60 см, 0,2 кг Размер 2: 45х70 см, 0,2 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	

175. Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro	Присоединяется при помощи липучек	Д x Ш x В, масса 18x12x7 см, 0,1 кг	Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
176. Поддержка поясницы Zitzi Sharky Pro	Располагается под обшивкой спинки. Используется чтобы создавать люмбальный изгиб.	Ш x В x толщина, масса Размер 1: 25x50x0,5 см, 0,1 кг Размер 2: 30x60x0,5 см, 0,1 Kg	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
177. Пластина, регулируемая по глубине	Пластина, с помощью которой изменяется глубина сиденья	Д x Ш x В, масса Размер 1: 15x13x0,5 см, 0,2 кг Размер 2: 17x15x0,5 см, 0,2 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
178. Упор для сопровождающего лица Seabass Pro	Упор, который облегчает сопровождающему лицу приподнимать передние колёса коляски для преодоления препятствий.	Д x Ш x В, масса 20x6x2 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
179. Упор для сопровождающего лица Guppy	Упор, который облегчает сопровождающему лицу приподнимать передние колёса коляски для преодоления препятствий.	Д x Ш x В, масса 20x8x2 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
180. Корзинка	Предназначается для складывания покупок или других необходимых вещей.	Д x Ш x В, масса 40x40x20 см, 0,3 кг	Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Pengy, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Pengy	

181.	Дождевик	Служит для защиты пользователя от дождя и других природных осадков.	В х Д х Ш, масса 120х50х50 см, 0,1 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Pengy	
182.	Вертикальная рама	Предназначается для пользователей, не могущих находиться в сидячем положении. Пользователь может находиться в горизонтальном или вертикальном положении. Не складная.	Длина х ширина х глубина, масса 99х40х20 см, 10 кг 120х50х30 см, 15 кг	Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

2. Классификационные сведения

Кресла-коляски для инвалидов Anatomic SITT относятся к 1 классу риска в соответствии с Приложением Директивы 93/42/ЕЕС.

3. Показания и противопоказания

Показания к применению:

Выраженные нарушения ходьбы и стояния в сочетании с выраженными нарушениями схвата и удержания предметов вследствие заболеваний, травм, врожденных пороков суставов, костей; заболеваний, травм центральной и периферической нервной системы:

- стойкие деформации или заболевания нижних конечностей, таза или позвоночника в сочетании со стойкими заболеваниями или деформациями верхних конечностей;
- парезы, выраженный парез обеих нижних конечностей в сочетании со стойкими заболеваниями, деформациями и парезами верхних конечностей;
- парезы, выраженный парез одной нижней конечности в сочетании со стойкими заболеваниями, деформациями и парезами верхних конечностей;
- гемиплегия, значительно выраженный гемипарез.

Противопоказания:

Последствия заболеваний травм и дефектов, приводящих к прогрессированию патологического процесса в положении пациента сидя.

4. Технические характеристики

Таблица 1. Zitzi Delfi Pro – размер 0

Параметр/размер	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex	Zitzi Delfi Pro Snapper	Zitzi Delfi Pro Pengy	Zitzi Delfi Pro Guppy
Складная/нескладная конструкция	Нескладная	Нескладная	Нескладная	Складная	Нескладная
Высота x Длина x Ширина, см, не более	55 x 66 x 58	55 x 81 x 63	81 x 59 x 53	88 x 106 x 66	92 x 67 x 57
Вес, кг, не более	28	44	29	26	28
Возможность регулировки параметров сиденья:					
Ширина сиденья	Регулируется				
Ширина сиденья, см, не более	24, 27, 30				
Глубина сиденья	Регулируется				
Глубина сиденья, см, мин., макс.	14-20				
Угол наклона сиденья	Регулируется				
Угол наклона сиденья	0 / +30°	0 / +30°	-3° / +22°	-23° / +40°	0 / +32°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не рег-ся	Регулируется
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	54	46/48/50
Абдукция/аддукция	-9/+18°				
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки				

Угол наклона спинки	-12°/+26°				
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	16-23				
Глубина боковой поддержки, см, не более	12,5				
Высота до подмыш. впадин, см, мин., макс.	17-27				
Разница в длине ног (длина ног), см, не более	10				
Рост пользователя, см, мин., макс.	60-80				
Вес пользователя, кг, не более	35	65	50	45	50
Колеса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18 Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	не более 0,35 Н				
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	не менее 150 Н				
Значения параметров ведущих колес:					
Развал	не более 2 градусов				
Схождение	не более 1 градуса				
Концентричность	не более 1% радиуса колеса				
Биение	не более 1% радиуса колеса				
Min. радиус поворота	Не более 500 мм	Не более 550 мм	Не более 450 мм	Не более 550	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 650 мм	Не более 700 мм	Не более 600 мм	Не более 700 мм	Не более 900 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	не более 50 Н				
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	не более 45 Н				
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:					
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	не более 60 Н	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н				
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н				
Хар-ки систем торможения:					
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Стояночный тормоз (педаль)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов				

Параметры тормозных устройств:					
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не более 10 см	Не применимо
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	не более 60 Н				
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски) (Н, не более)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	80 Н	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья (Н, не более)	23 Н	23 Н	20 Н	Не применимо	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки (Н, не более)	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н	13 Н

Таблица 2. Zitzi Delfi Pro – размер 1

Параметр/размер	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex	Zitzi Delfi Pro Snapper	Zitzi Delfi Pro Pengy	Zitzi Delfi Pro Guppy
Складная/нескладная конструкция	нескладная	нескладная	нескладная	складная	нескладная
Высота x Длина x Ширина, см, не более	65x 74x58	65 x 81 x 63	84 x 59 x 53	96 x 106 x 66	96 x 67 x 57
Вес, кг, не более	28,5	44,5	29,5	26,5	28,8
Возможность регулировки параметров сиденья:					
Ширина сиденья	Регулируется				
Ширина сиденья, см, не более	26, 29, 32				
Глубина сиденья	Регулируется				
Глубина сиденья, см, мин., макс.	17-26				
Угол наклона сиденья	Регулируется				
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	-23° /+40°	0/+32°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не регулируется	3 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	54	46/48/50
Абдукция/аддукция	-9/+18°				
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки				
Угол наклона спинки	-12°/+26°				
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	16-26				
Глубина боковой поддержки, см, не более	12,5				
Высота до подмыш. впадин, см, мин., макс.	17-27				
Разница в длине ног (длина ног), см, не более	10				
Рост пользователя, см, мин., макс.	70-100				

Вес пользователя, кг, не более	35	65	50	45	55
Колеса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	не более 0,35 Н				
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	не менее 150 Н				
Значения параметров ведущих колес:					
Развал	не более 2 градусов				
Схождение	не более 1 градуса				
Концентричность	не более 1% радиуса колеса				
Биение	не более 1% радиуса колеса				
Min. радиус поворота	Не более 500 мм	Не более 550 мм	Не более 450 мм	Не более 550	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 650 мм	Не более 700 мм	Не более 600 мм	Не более 700 мм	Не более 900 мм
Усилия, необходимые для прогания с места	Не более 50 Н				
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н				
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:					
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	не более 60 Н	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н				
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н				
Хар-ки систем торможения:					
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Стояночный тормоз (педаль)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов				
Параметры тормозных устройств:					
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не более 10 см	Не применимо
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н				
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски) (Н, не более)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	80 Н	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки	23 Н	23 Н	20 Н	Не применимо	24 Н

высоты сиденья (Н, не более)					
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки (Н, не более)	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н	13 Н

Таблица 3. Zitzi Delfi Pro – размер 2

Параметр/размер	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex	Zitzi Delfi Pro Snapper	Zitzi Delfi Pro Pengy	Zitzi Delfi Pro Guppy
Складная/нескладная конструкция	нескладная	нескладная	нескладная	складная	нескладная
Высота х Длина х Ширина, см, не более	75x 74x58	75 x 81 x 63	87 x 59 x 53	100 x 106 x 66	100 x 67 x 57
Вес , кг, не более	29	45	30	27	29
Возможность регулировки параметров сиденья:					
Ширина сиденья	Регулируется, 3 положения				
Ширина сиденья, см, не более	28, 31, 34				
Глубина сиденья	Регулируется				
Глубина сиденья, см, мин., макс.	24-34				
Угол наклона сиденья	Регулируется				
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	-23° /+40°	0/+32°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не регулируется	3 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	54	46/48/50
Абдукция/аддукция	-9/+18°				
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки				
Угол наклона спинки	-12°/+26°				
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	19-28				
Глубина боковой поддержки, см, не более	15				
Высота до подмыш. впадин, см, мин., макс.	24-34				
Разница в длине ног, см, не более	10				
Рост пользователя, см, мин., макс.	90-130				
Вес пользователя, кг, не более	75	75	75	50	65
Колеса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н				
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н				
Значения параметров ведущих колес:					
Развал	не более 2 градусов				
Схождение	не более 1 градуса				
Концентричность	не более 1% радиуса колеса				
Биение	не более 1% радиуса колеса				

Min. радиус поворота	Не более 500 мм	Не более 550 мм	Не более 450 мм	Не более 550	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 650 мм	Не более 700 мм	Не более 600 мм	Не более 700 мм	Не более 900 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н				
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н				
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:					
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	не более 60 Н	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н				
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н				
Хар-ки систем торможения:					
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Стояночный тормоз (педаль)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов				
Параметры тормозных устройств:					
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не более 10 см	Не применимо
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н				
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски) (Н, не более)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	80 Н	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья (Н, не более)	23 Н	23 Н	20 Н	Не применимо	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки (Н, не более)	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н	13 Н

Таблица 4. Zitzi Delfi Pro – размер 3

Параметр/размер	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex	Zitzi Delfi Pro Snapper	Zitzi Delfi Pro Guppy	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro
Складная/нескладная конструкция	нескладная	нескладная	нескладная	нескладная	нескладная
Высота x Длина x Ширина, см, не более	85x 84x58	85 x 81 x 63	91 x 59 x 53	110 x 67 x 57	135 x 77 x 60

Вес, кг, не более	29,5	45,5	30,5	26,5	31,5
Возможность регулировки параметров сиденья:					
Ширина сиденья	Регулируется, 3 положения				
Ширина сиденья, см, не более	30, 33, 36				
Глубина сиденья	Регулируется				
Глубина сиденья, см, мин., макс.	30-40				
Угол наклона сиденья	Регулируется				
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	0/+32°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Регулируется, 3 положения	Регулируется, 2 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	46/48/50	41/46
Абдукция/аддукция	-9/+18°				
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки				
Угол наклона спинки	-12°/+26°				
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	22-31				
Глубина боковой поддержки, см, не более	17,5				
Высота до подмыш. впадин, см, мин., макс.	30-40				
Разница в длине ног, см, не более	10				
Рост пользователя, см, мин., макс.	120-160				
Вес пользователя, кг, не более	75	75	75	70	90
Колеса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60	Передние 15; 18. Задние 30; 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н				
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н				
Значения параметров ведущих колес:					
Развал	не более 2 градусов				
Схождение	не более 1 градуса				
Концентричность	не более 1% радиуса колеса				
Биение	не более 1% радиуса колеса				
Min. радиус поворота	Не более 600 мм	Не более 650 мм	Не более 550 мм	Не более 650	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 750 мм	Не более 800 мм	Не более 700 мм	Не более 800 мм	Не более 1000 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н				
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н				
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях					

кресел-колясок и их элементов:					
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н				
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н				
Хар-ки систем торможения:					
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов				
Параметры тормозных устройств:					
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не применимо	Не применимо
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н				
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски) (Н, не более)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	Антипрокидыватель	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья (Н, не более)	23 Н	23 Н	20 Н	24 Н	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки (Н, не более)	15 Н	15 Н	13 Н	13 Н	13 Н

Таблица 5. Zitzi Delfi Pro – размер 4

Параметр/размер	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex	Zitzi Delfi Pro Snapper	Zitzi Delfi Pro Guppy	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro
Складная/нескладная конструкция	нескладная	нескладная	нескладная	нескладная	нескладная
Высота x Длина x Ширина, см, не более	94x 84x58	94 x 81 x 63	96 x 59 x 53	120 x 67 x 57	146 x 77 x 60
Вес, кг, не более	30	46	31	27	35
Возможность регулировки параметров сиденья:					
Ширина сиденья	Регулируется, 3 положения				
Ширина сиденья, см, не более	32, 35, 38				
Глубина сиденья	Регулируется				
Глубина сиденья, см, мин., макс.	37-45				
Угол наклона сиденья	Регулируется				
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	0/+32°	0/+35°

Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Регулируется, 3 положения	Регулируется, 2 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	46/48/50	41/46
Абдукция/аддукция	-9/+18°				
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки				
Угол наклона спинки	-12°/+26°				
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	22-31				
Глубина боковой поддержки, см, не более	17,5				
Высота до подмыш. впадин, см, мин., макс.	37-45				
Разница в длине ног, см, не более	10				
Рост пользователя, см, мин., макс.	140-170				
Вес пользователя, кг, не более	75	75	75	70	90
Колеса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60	Передние 15; 18. Задние 30; 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н				
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н				
Значения параметров ведущих колес:					
Развал	не более 2 градусов				
Схождение	не более 1 градуса				
Концентричность	не более 1% радиуса колеса				
Биение	не более 1% радиуса колеса				
Min. радиус поворота	Не более 600 мм	Не более 650 мм	Не более 550 мм	Не более 650	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 750 мм	Не более 800 мм	Не более 700 мм	Не более 800 мм	Не более 1000 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н				
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н				
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:					
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н				
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н				
Хар-ки систем					

торможения:					
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов				
Параметры тормозных устройств:					
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не применимо	Не применимо
Усилие при торможении к рукоятке стояночного	Не более 60 Н				
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски) (Н, не более)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	Антипрокидыватель	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья (Н, не более)	23 Н	23 Н	20 Н	24 Н	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки (Н, не более)	15 Н	15 Н	13 Н	13 Н	13 Н

Таблица 6. Zitzi Pengy

	Zitzi Pengy Flipper Pro	Zitzi Pengy Flipper Pro Flex	Zitzi Pengy Snapper	Zitzi Pengy Pengy
Складная/нескладная конструкция	нескладная	нескладная	нескладная	складная
Высота x Длина x Ширина, см, не более	110 x 84 x 58	115 x 81 x 63	112 x 59 x 53	100 x 106 x 66
Вес, кг, не более	25	38	23	19
Возможность регулировки параметров сиденья:				
Ширина сиденья	Не регулируется			
Ширина сиденья, см, не более	34			
Глубина сиденья	Регулируется			
Глубина сиденья, мин., макс.	28-38			
Угол наклона сиденья	Регулируется			
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3°/+22°	-23°/+40°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не регулируется
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	54
Абдукция/аддукция	-9/+18°			
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки			
Угол наклона спинки	-10/+30°			
Ширина боковой поддержки,	19 - 28			

мин., макс.				
Глубина боковой поддержки, см, мин, макс.	19 - 28			
Высота до подмышечных впадин, см, не более	20-35			
Разница в длине ног, см, не более	10			
Рост пользователя, см, мин., макс.	90-140			
Вес пользователя, кг, не более	45	45	45	45
Колеса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н			
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н			
Значения параметров ведущих колес:				
Развал	не более 2 градусов			
Схождение	не более 1 градуса			
Концентричность	не более 1% радиуса колеса			
Биение	не более 1% радиуса колеса			
Min. радиус поворота	Не более 500 мм	Не более 550 мм	Не более 450 мм	Не более 550
Min. ширина разворота	Не более 650 мм	Не более 700 мм	Не более 600 мм	Не более 700 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н			
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н			
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:				
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не более 60 Н
Для закрепления спинки	не более 80 Н			
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н			
Хар-ки систем торможения:				
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Стояночный тормоз (педаль)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов			
Параметры тормозных устройств:				
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо.	Не более 10 см	Не более 10 см
Усилие при торможении к	Не более 60 Н			

рукоятке стояночного тормоза				
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	80 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	Не предусмотрено.
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н

Таблица 7. Zitzy Sharky Pro (размеры 1, 2)

	Zitzy Sharky Pro Flipper Pro	Zitzy Sharky Pro Flipper Pro Flex	Zitzy Sharky Pro Snapper	Zitzy Sharky Pro Seabass Pro
Размеры	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Складная/нескладная конструкция	нескладная	нескладная	нескладная	нескладная
Высота х Длина х Ширина, см, не более	88-137 х 84 х 58	96-142 х 84 х 63	114-139 х 59 х 53	113-123 х 77 х 60
Вес, кг, не более	34 / 35	46 / 47	31 / 32	36 / 37
Возможность регулировки параметров сиденья:				
Ширина сиденья	Регулируется, 3 положения			
Ширина сиденья, см, не более	36, 39, 42 / 43, 46, 49			
Глубина сиденья	Регулируется			
Глубина сиденья, см, мин., макс.	37-47 / 45-55			
Угол наклона сиденья	Регулируется			
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется бесступенчатая регулировка	Регулируется бесступенчатая регулировка	Регулируется бесступенчатая регулировка	Регулируется 2 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	41/46
Абдукция/аддукция	-9/+18°			
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки.			
Угол наклона спинки	-10°/+25°			
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	27-35 / 30-38			
Глубина боковой поддержки, см, не более	21 / 25			
Высота до подмыш. впадин, см, мин. .макс.	35-50 / 40-55			
Разница в длине ног, см, не более	10			
Рост пользователя, см, мин., макс.	150-180 / 170-195			
Вес пользователя, кг, не более	75	65	75	130
Колеса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 15; 18. Задние 30; 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при	Не более 0.35 Н			

горизонтальном движении				
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н			
Значения параметров ведущих колес:				
Развал	не более 2 градусов			
Схождение	не более 1 градуса			
Концентричность	не более 1% радиуса колеса			
Биение	не более 1% радиуса колеса			
Min. радиус поворота	Не более 700 мм	Не более 750 мм	Не более 650 мм	Не более 650 мм
Min. ширина разворота	Не более 800 мм	Не более 900 мм	Не более 800 мм	Не более 1100 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 80 Н			
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н			
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:				
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо.
Для закрепления спинки	не более 80 Н			
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н			
Хар-ки систем торможения:				
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов			
Параметры тормозных устройств:				
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо.	Не более 10 см	Не применимо.
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н			
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	95Н	Антипрокидыватель	80Н	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	24Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н

Таблица 8. Anatomic Sits – размер 1

Параметр/размер	Anatomic Sits Flipper Pro	Anatomic Sits Flipper Pro Flex	Anatomic Sits Snapper	Anatomic Sits Pengy	Anatomic Sits Guppy	Anatomic Sits Seabass Pro
Складная/нескладная конструкция	Нескладная	Нескладная	Нескладная	Складная	Нескладная	Нескладная
Высота х Длина х Ширина, см, не более	До 110 х 84 х 58	До 115 х 81 х 63	До 112 х 53 х 59	До 100 х 95 х 66	До 120 х 67 х 57	До 146 х 77 х 60
Вес, кг, не более	29	41	26	22	24	30
Возможность регулировки параметров сиденья:						
Ширина сиденья	Регулируется					
Ширина сиденья, см, мин., макс.	20-30					
Глубина сиденья	Регулируется					
Глубина сиденья, см, мин., макс.	15-20					
Угол наклона сиденья	Регулируется					
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	-23° /+40°	0/+32°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не регулируется	Рег-ся, 3 положения	Рег-ся, 2 положения
Высота сиденья, см, не более	23-61	29-65	46-62	54	46/48/50	41 / 46
Абдукция/аддукция	-10° / +45°					
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки					
Угол наклона спинки	-10° - +26°					
Ширина грудной клетки, см, мин., макс.	17 - 31					
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	16-26					
Глубина боковой поддержки, см, не более	13					
Высота до подмыш. Впадин, см, мин., макс.	20-27					
Разница в длине ног, см, не более	10					
Рост пользователя, см, мин., макс.	50-100					
Вес пользователя, кг, не более	50	50	50	50	50	70
Колёса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60	Передние 15; 18. Задние 30; 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н					
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н					
Значения параметров ведущих колес						
Развал	не более 2 градусов					
Схождение	не более 1 градуса					

Концентричность	не более 1% радиуса колеса					
Биение	не более 1% радиуса колеса					
Min. радиус поворота	Не более 500 мм	Не более 550 мм	Не более 450 мм	Не более 550	Не более 600 мм	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 650 мм	Не более 700 мм	Не более 600 мм	Не более 700 мм	Не более 900 мм	Не более 900 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н					
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н					
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:						
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применим	Не применим	Не применим	не более 60 Н	Не применим	Не применим
Для закрепления спинки	не более 80 Н					
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н					
Хар-ки систем торможения:						
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Стояночный тормоз (педаль)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов					
Параметры тормозных устройств:						
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применим	Не более 10 см	Не более 10 см	Не применим	Не применим
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н					
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	80 Н	Антипрокидыватель	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	Не предусмотрено.	24 Н	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н	13 Н	13 Н.

Таблица 9. Anatomic Sits – размер 2

Параметр/размер	Anatomic Sits Flipper Pro	Anatomic Sits Flipper Pro Flex	Anatomic Sits Snapper	Anatomic Sits Pengy	Anatomic Sits Guppy	Anatomic Sits Seabass Pro
-----------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

Складная/нескладная конструкция	Нескладная	Нескладная	Нескладная	Складная	Нескладная	Нескладная
Высота х Длина х Ширина, см, не более	До 135 х 84 х 58	До 140 х 81 х 63	До 137 х 53 х 59	До 100 х 106 х 66	До 120 х 67 х 57	До 146 х 77 х 60
Вес, кг, не более	34	46	31	27	29	35
Возможность регулировки параметров сиденья:						
Ширина сиденья	Регулируется					
Ширина сиденья, см, мин., макс.	28-45					
Глубина сиденья	Регулируется					
Глубина сиденья, см, мин., макс.	17-45					
Угол наклона сиденья	Регулируется					
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	-23° /+40°	0/+32°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не рег-ся	Рег-ся 3 положения	Рег-ся 2 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	54	46/48/50	41/46
Абдукция/аддукция	-10°/ +45°					
Возможность регулировки параметров спинки	Регулируется угол наклона спинки					
Угол наклона спинки	-10° /+90°					
Ширина грудной клетки, см, мин., макс.	17-31					
Ширина боковой поддержки, см., мин., макс.	19-28					
Глубина боковой поддержки, см, мин., макс.	15-16					
Высота до подмыш. Впадин, см, мин., макс.	24-34					
Разница в длине ног, см, не более	10					
Рост пользователя, см, не более	90-130					
Вес пользователя, кг, не более	75	75	75	50	70	130
Колёса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60	Передние 15; 18. Задние 30; 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н					
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н					
Значения параметров ведущих колес						
Развал	не более 2 градусов					
Схождение	не более 1 градуса					
Концентричность	не более 1% радиуса колеса					
Биение	не более 1% радиуса колеса					

Min. радиус поворота	Не более 500 мм	Не более 550 мм	Не более 450 мм	Не более 550	Не более 600 мм	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 650 мм	Не более 700 мм	Не более 600 мм	Не более 700 мм	Не более 1000 мм	Не более 1000 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н					
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н					
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:						
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	не более 60 Н	Не применимо	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н					
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н					
Хар-ки систем торможения:						
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Стояночный тормоз (педаль)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов					
Параметры тормозных устройств:						
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не более 10 см	Не применимо	Не применимо
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н					
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	80 Н	Антипрокидыватель	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	Не предусмотрено.	24 Н	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н	13 Н	13 Н.

Таблица 10. Anatomic Sits – размер 3

Параметр/размер	Anatomic Sits Flipper Pro	Anatomic Sits Flipper Pro Flex	Anatomic Sits Snapper	Anatomic Sits Seabass Pro
Складная/нескладная конструкция	Нескладная	Нескладная	Нескладная	Нескладная
Высота x Длина x Ширина,	До 185 x 84 x	До 190 x 81 x 63	До 187 x 53 x 59	До 146 x 77 x 60

см, не более	58			
Вес, кг, не более	44	56	41	45
Возможность регулировки параметров сиденья:				
Ширина сиденья	Регулируется			
Ширина сиденья, см, мин., макс.	45-65			
Глубина сиденья	Регулируется			
Глубина сиденья, см, мин., макс.	40-70			
Угол наклона сиденья	Регулируется			
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Рег-ся, 2 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	41/46
Абдукция/аддукция	-10°/ +45°			
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки			
Угол наклона спинки	-10° / +90°			
Ширина грудной клетки, см, мин., макс.	17-31			
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	22-31			
Глубина боковой поддержки, см., мин., макс.	17-18			
Высота до подмыш. Впадин, см, мин., макс.	30-45			
Разница в длине ног, см, не более	10			
Рост пользователя, см, мин., макс.	120-200			
Вес пользователя, кг, не более	75	75	75	135
Колёса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 15; 18. Задние 30; 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н			
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н			
Значения параметров ведущих колес:				
Развал	не более 2 градусов			
Схождение	не более 1 градуса			
Концентричность	не более 1% радиуса колеса			
Биение	не более 1% радиуса колеса			
Min. радиус поворота	Не более 700	Не более 750 мм	Не более 650 мм	Не более 650 мм

	мм			
Min. ширина разворота	Не более 800 мм	Не более 900 мм	Не более 800 мм	Не более 1100 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 80 Н			
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н			
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:				
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо.
Для закрепления спинки	не более 80 Н			
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н			
Хар-ки систем торможения:				
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов			
Параметры тормозных устройств:				
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо.	Не более 10 см	Не применимо.
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н			
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	95Н	Антипрокидыватель	80Н	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	24Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н

Таблица 11. Anatomic Soft Sits – размер 1

Параметр/размер	Anatomic Soft Sits Flipper Pro	Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex	Anatomic Soft Sits Snapper	Anatomic Soft Sits Pengy	Anatomic Soft Sits Guppy	Anatomic Soft Sits Seabass Pro
Складная/нескладная	Нескладна	Нескладная	Нескладна	Складная	Нескладна	Нескладна

конструкция	я		я		я	я
Высота х Длина х Ширина, см, не более	До 110 х 84 х 58	До 115 х 81 х 63	До 112 х 53 х 59	До 100 х 95 х 66	До 120 х 67 х 57	До 146 х 7 х 60
Вес, кг, не более	29	41	26	22	24	30
Возможность регулировки параметров сиденья:						
Ширина сиденья	Регулируется					
Ширина сиденья, см, мин., макс.	20-30					
Глубина сиденья	Регулируется					
Глубина сиденья, см, мин., макс.	15-20					
Угол наклона сиденья	Регулируется					
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	-23° /+40°	0/+32°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не регулируется	Рег-ся, 3 положения	Рег-ся, 2 положения:
Высота сиденья, см, не более	23-61	29-65	46-62	54	46/48/50	41 / 46
Абдукция/аддукция	-10°/ +45°					
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки					
Угол наклона спинки	-10° - +26°					
Ширина грудной клетки, см, мин., макс.	17 - 31					
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	16-26					
Глубина боковой поддержки, см, не более	13					
Высота до подмыш. Впадин, см, мин., макс.	20-27					
Разница в длине ног, см, не более	10					
Рост пользователя, см, мин., макс.	50-100					
Вес пользователя, кг, не более	50	50	50	50	50	70
Колёса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60	Передние 15; 18. Задние 30 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н					
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н					
Значения параметров ведущих колес						
Развал	не более 2 градусов					
Схождение	не более 1 градуса					
Концентричность	не более 1% радиуса колеса					
Биение	не более 1% радиуса колеса					
Min. радиус поворота	Не более 500 мм	Не более 550 мм	Не более 450 мм	Не более 550	Не более 600 мм	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 650 мм	Не более 700 мм	Не более 600 мм	Не более 700 мм	Не более 900 мм	Не более 900 мм

Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н					
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н					
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:						
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	не более 60 Н	Не применимо	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н					
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н					
Хар-ки систем торможения:						
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Стояночный тормоз (педаль)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов					
Параметры тормозных устройств:						
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не более 10 см	Не применимо	Не применимо
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н					
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	80 Н	Антипрокидыватель	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	Не предусмотрено.	24 Н	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н	13 Н	13 Н.

Таблица 12. Anatomic Soft Sits – размер 2

Параметр/размер	Anatomic Soft Sits Flipper Pro	Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex	Anatomic Soft Sits Snapper	Anatomic Soft Sits Pengy	Anatomic Soft Sits Guppy	Anatomic Soft Sits Seabass Pro
Складная/нескладная конструкция	Нескладная	Нескладная	Нескладная	Складная	Нескладная	Нескладная
Высота x Длина x Ширина, см, не более	До 135 x 84 x 58	До 140 x 81 x 63	До 137 x 53 x 59	До 100 x 106 x 66	До 120 x 67 x 57	До 146 x 7 x 60
Вес, кг, не более	34	46	31	27	29	35
Возможность регулировки						

параметров сиденья:						
Ширина сиденья	Регулируется					
Ширина сиденья, см, мин., макс.	28-45					
Глубина сиденья	Регулируется					
Глубина сиденья, см, мин., макс.	17-45					
Угол наклона сиденья	Регулируется					
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	-23° /+40°	0/+32°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не рег-ся	Рег-ся 3 положения	Рег-ся 2 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	54	46/48/50	41/46
Абдукция/аддукция	-10° / +45°					
Возможность регулировки параметров спинки	Регулируется угол наклона спинки					
Угол наклона спинки	-10° /+90°					
Ширина грудной клетки, см, мин., макс.	17-31					
Ширина боковой поддержки, см., мин., макс.	19-28					
Глубина боковой поддержки, см, мин., макс.	15-16					
Высота до подмыш. Впадин, см, мин., макс.	24-34					
Разница в длине ног, см, не более	10					
Рост пользователя, см, не более	90-130					
Вес пользователя, кг, не более	75	75	75	50	70	130
Колёса. диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60	Передние 15; 18. Задние 30 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н					
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н					
Значения параметров ведущих колес						
Развал	не более 2 градусов					
Схождение	не более 1 градуса					
Концентричность	не более 1% радиуса колеса					
Биение	не более 1% радиуса колеса					
Min. радиус поворота	Не более 500 мм	Не более 550 мм	Не более 450 мм	Не более 550	Не более 600 мм	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 650 мм	Не более 700 мм	Не более 600 мм	Не более 700 мм	Не более 900 мм	Не более 900 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н					

Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н					
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:						
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	не более 60 Н	Не применимо	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н					
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н					
Хар-ки систем торможения:						
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Стояночный тормоз (педаль)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов					
Параметры тормозных устройств:						
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не более 10 см	Не применимо	Не применимо
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н					
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	80 Н	Антипрокидыватель	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	Не предусмотрено.	24 Н	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н	13 Н	13 Н.

Таблица 13. Anatomic Soft Sits – пазмер 3

Параметр/размер	Anatomic Soft Sits Flipper Pro	Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex	Anatomic Soft Sits Snapper	Anatomic Soft Sits Seabass Pro
Складная/нескладная конструкция	Нескладная	Нескладная	Нескладная	Нескладная
Высота х Длина х Ширина, см, не более	До 185 х 84 х 58	До 190 х 81 х 63	До 187 х 53 х 59	До 146 х 77 х 60
Вес, кг, не более	44	56	41	45
Возможность регулировки параметров сиденья:				
Ширина сиденья	Регулируется			

Ширина сиденья, см, мин., макс.	45-65			
Глубина сиденья	Регулируется			
Глубина сиденья, см, мин., макс.	40-70			
Угол наклона сиденья	Регулируется			
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Рег-ся, 2 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	41/46
Абдукция/аддукция	-10° / +45°			
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки			
Угол наклона спинки	-10° / +90°			
Ширина грудной клетки, см, мин., макс.	17-31			
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	22-31			
Глубина боковой поддержки, см., мин., макс.	17-18			
Высота до подмыш. Впадин, см, мин., макс.	30-45			
Разница в длине ног, см, не более	10			
Рост пользователя, см, мин., макс.	120-200			
Вес пользователя, кг, не более	75	75	75	135
Колёса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 15; 18. Задние 30; 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н			
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н			
Значения параметров ведущих колес:				
Развал	не более 2 градусов			
Схождение	не более 1 градуса			
Концентричность	не более 1% радиуса колеса			
Биение	не более 1% радиуса колеса			
Min. радиус поворота	Не более 700 мм	Не более 750 мм	Не более 650 мм	Не более 650 мм
Min. ширина разворота	Не более 800 мм	Не более 900 мм	Не более 800 мм	Не более 1100 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 80 Н			

Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н			
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:				
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо.
Для закрепления спинки	не более 80 Н			
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н			
Хар-ки систем торможения:				
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов			
Параметры тормозных устройств:				
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо.	Не более 10 см	Не применимо.
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н			
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	95Н	Антипрокидыватель	80Н	Антипрокидывае тель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	24Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н

Таблица 14. Carseat Pro

Параметр/размер	Carseat Pro (с рамой Pengy) Размеры 1/2
Складная/нескладная конструкция	Складная
Высота х Длина х Ширина, см, не более	107х95х66 / 130х106х66
Возможность регулировки параметров сиденья:	
Ширина сиденья	Не регулируется
Ширина сиденья, см, не более	34
Глубина сиденья	Регулируется
Глубина сиденья, см, мин., макс.	27-36 / 32-41
Угол наклона сиденья	Регулируется
Угол наклона сиденья	-23° /+40°

Высота сиденья	Не регулируется
Высота сиденья, см, не более	54
Абдукция/аддукция	-9/+18°
Возможность регулировки параметров спинки:	
Угол наклона спинки	Не регулируется
Ширина грудной клетки, см, мин., макс.	14-24 / 16-26
Глубина боковой поддержки, см, не более	12 / 13
Высота до подмыш. Впадин, см, мин., макс.	22-29 / 26-33
Разница в длине ног (длина ног), см, не более	10
Рост пользователя, см, мин., макс.	90-135 / 115-155
Вес пользователя, кг, мин., макс.	15-25 / 15-36
Вес, кг, не более	19 / 21
Колёса, диаметр, см, не более	Передние 20; 30 Задние 30
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н
Значения параметров ведущих колес:	
Развал	не более 2 градусов
Схождение	не более 1 градуса
Концентричность	не более 1% радиуса колеса
Биение	не более 1% радиуса колеса
Min. радиус поворота	Не более 550 мм
Min. ширина разворота	Не более 700 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	не более 45 Н
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:	
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н
Хар-ки систем торможения:	
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)
Требования статической устойчивости к системам торможения	Удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов
Параметры тормозных устройств:	

Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	Не более 80 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	Не предусмотрено.
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	Не предусмотрено.

Таблица 15. Газовая пружина. Технические характеристики

	Газовая пружина, 185 мм /200 Н	Газовая пружина, 205 мм/300 Н	Газовая пружина, 185 мм /500 Н	Газовая пружина, 365 мм /200 Н	Газовая пружина, 380 мм/ 800 Н	Газовая пружина, 380 мм /1200 Н
Назначение	Для регулировки параметров спинки	Для регулировки параметров спинки	Для регулировки параметров спинки	Для регулировки параметров сиденья	Для регулировки параметров сиденья	Для регулировки параметров сиденья
Длина, мм, не более	185 мм	205 мм	185 мм	365 мм	380 мм	380 мм
Сила, Н, не более	200 Н	300 Н	500 Н	200 Н	800 Н	1200 Н
Масса, кг, не более	1 кг	1 кг	1 кг	1 кг	1 кг	1 кг

Таблица 16. Прочностные характеристики принадлежностей, предназначенных для фиксации пациента

	Материал	Растяжимость, мм, не более (на нагрузке 2000 Н)	Усилие на разрыв во влажном состоянии (кН, не менее)	Усилие на разрыв в сухом состоянии (кН, не менее)
Активная повязка для лба Zitzi	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Активная повязка для лба Junior, Pro Serie	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Активная повязка для лба Adult, Pro Serie	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Грудной ремень Х-образный Pro	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Грудной ремень Х-образный Exclusive	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13

Грудной ремень Н-образный Pro	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Грудной ремень Н-образный Exclusive	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Грудной ремень Zitzi Delfi Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Грудной ремень Soft Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Бедренный ремень Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Бедренный ремень Comfort Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Бедренный ремень Exclusive	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Бедренный антиротационный ремень	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Фиксатор голеностопа Exclusive	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Фиксатор голеностопа Soft	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Фиксатор голеностопа Pro	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Ремни для ног	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Ремень для ступней	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Браслет Soft	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Браслет	Нейлон - PP Nylon	7	12	10

Таблица 17. Прочностные характеристики мест соединения принадлежностей и кресел-колясок, имеющих непосредственное отношение к пользователю

	Усилие на отрыв крепежных соединений, кН, не менее
Поддержка таза	18
Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro	10
Боковая поддержка фиксированная Zitzi Sharky Pro	10
Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro	10
Боковая поддержка откидная Zitzi Sharky Pro	10
Усиленная основа боковой поддержки Zitzi Sharky Pro	15
Подголовники	
Подголовник Pengy	10
Подголовник Zitzi Sharky Pro Standard	10
Подголовник Pengy удлиненный	12
Подголовник Pro Standard	10
Подголовник Pro Standard удлиненный	12
Подголовник Pro Mini	10
Подголовник Pro Serie Adult	10
Подголовник Pro Serie Adult	10
Подголовник Pro Junior	10
Подголовник Pro Junior Anatomic sits	10
Подголовник Pro Single adult, junior	10
Подголовник Pro Plush	10
Подголовник Pro Plush регулируемый	10
Подголовник Black Bear	10
Подголовник LINX Plush регулируемый	10
Подголовник Carseat	10
Подголовник Carseat удлинённый	12
Подлокотники	
Подлокотник	10
Подлокотник Guppy	10
Подлокотник Zitzi Sharky Pro	10
Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный	10
Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной	10
Опора для предплечья	10
Подлокотная опора	10
Подножки	
Подножка Carseat Pro	14

Единая подножка Zitzi Delfi Pro	14
Единая подножка Pengy	14
Единая подножка Seabass Pro	14
Платформа для ног	14
Регулируемая единая подножка	14
Откидная единая подножка	14
Откидная единая подножка Seabass Pro	14
Раздельные подножки	10
Раздельные подножки Seabass Pro	10
Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro Регулируемые раздельные подножки	10
Откидные раздельные подножки	10
Откидные регулируемые подножки	10
Высокие бортики для подножек	8
Высокие бортики для раздельных подножек	8
Подножка МН	10
Опоры	
Опора для икр, с одним держателем	10
Опора для икр, с двумя держателями	10
Опора для икр Pengy	10
Опора для стопы, правая / левая	12
Пластиковая часть опоры бедра усиленная, правая и левая	8
Пластиковая часть опоры бедра, правая и левая	8
Пластиковая часть опоры бедра, медиально/латерально +4см	8
Опора бедра, медиально/латерально +4 см	8

Таблица 18. Принадлежности, технические характеристики

Название	Размеры (не более) Масса (не более)
1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro	Д х Ш х В, масса Размер 1: 12,5 х 8.5 х 17-26 см, 1.2 кг Размер 2, 15х 9.5 х 19-28 см, 1.5, кг
	Д х Ш х В, масса Размер 3: 17,5 х 11х 22-31 см, 1.8 кг
3. Боковая поддержка фиксированная Zitzi Sharky Pro	Д х В, масса Размер 1: 27-35 х 21 см Размер 2: 30-38 х 25 см
4. Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro	Д х В, масса Размер 1, 17-26 см/12,5 см, 1.2 кг Размер 2, 19-28 см/15 см, 1.5, кг Размер 3, 22-31 см/17,5 см, 1.8 кг
5. Боковая поддержка откидная Zitzi Sharky Pro	Д х В, масса Размер 1 - 27-35 см/21 см, 2 кг Размер 2, 30-38 см/ 25 см, 2.1 кг
6. Усиленная основа боковой поддержки Zitzi Sharky Pro	Д х Ш х В, масса Размер 1: 12 х 5 х 12 см, 150 г Размер 2: 12, 5 х 8 х 19 см, 200 г
7. Крепеж боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, складной	Д х Ш х В, масса 10 х 5 х 10 см, 150 г
8. Подголовник Pengy	Д х В, масса Размер 1: 22 х 15 см, 200 г Размер 2: 24 х 19 см, 210 г
9. Подголовник Zitzi Sharky Pro Standard	Д х В, масса Размер 1 удлинённый: 28х16 см, 220 г Размер 2: 24х19 см, 200 г Размер 2 удлинённый: 28х21 см, 230 г
10.Подголовник Pengy удлинённый	Д х В, масса Размер 1: 25 х 16 см, 220 г Размер 2: 27 х 21 см, 230 г
11.Подголовник Pro Standard	Д х В, масса Размер 1: 22 х 15 см, 1 кг Размер 2: 24 х 19 см, 1.2 кг
12.Подголовник Pro Standard удлинённый,	Д х В, масса Размер 1: 28 х 16 см, 1.4 кг Размер 2: 28 х 21 см, 1.5 кг
13.Подголовник Pro Mini	Д х В, масса Размер 1: 22 х 14 см, 1.2 кг Размер 2: 25,5 х 16 см, 1.3 кг Размер 3: 33 х 19 см 1.4 кг
14.Подголовник Pro Serie Adult	В х Д, масса 24 х 37 см, 1.5 кг
15.Подголовник Pro Serie Adult	В х Д, масса 26 х 32 см, 1.4 кг
16.Подголовник Pro Junior	В х Д, масса 27 х 35 см, 1.2 кг
17.Подголовник Pro Junior	В х Д, масса

Anatomic sits	29 x 37 см, 1.4 кг
18.Подголовник Pro Single adult, junior	В x Д, масса Взрослый размер: 30 x 37 см, 1.3 кг Детский размер: 24 x 37 см, 1.2 кг
19.Подголовник Pro Plush	Длина, масса Размер 1: длина 20 см, 1.2 кг Размер 2: длина 25 см, 1.3 кг Размер 3: длина 35 см, 1.4 кг Размер 4: длина 40 см, 1.5 кг
20.Подголовник Pro Plush регулируемый	Д, В, масса Размеры: 21. Низкий: 15-35см, 1.2 кг 22. Стандартный: 20-45, 1.5 кг
23.Подголовник Black Bear	Д x В, масса размеры: 1.Стандартный: 27 x 26 см, 1.2 кг 2.Удлиненный: 29 x 26 см, 1.25 кг
24.Подголовник LINX Plush	В, масса Размеры: 1: 20 см, 1.2 кг 2: 25 см, 1.3 кг 3: 35 см, 1.4 кг 4. 40 см, 1.5 кг
25.Подголовник LINX Plush регулируемый	В, масса Размеры: 1.Низкий: 15-35см, 1.2 кг 2.Стандартный: 20-45, 1.5 кг
26.Подголовник Carseat	В x Д, масса 24 x 43 см, 1,3 кг
27.Подголовник Carseat удлинённый	В x Д, масса 24x37 см, 1,2 кг
28.Регулируемое крепление подголовника	В x Д, масса 10 x 5 x 3 см, 0.5 кг
29.Активная повязка для лба Zitzi	В x Д x Ш, масса 2 x 10 x 1 см, 0.2 кг
30.Активная повязка для лба Junior, Pro Serie	Д x В x Ш, масса 20 x 5 x 1 см, 0.1 кг
31.Активная повязка для лба Adult, Pro Serie	Д x В x Ш, масса 20 x 5 x 3 см, 0.4 кг
32.Крепежный кронштейн для активной повязки для лба	В x Д x Ш, масса 5 x 10 x 1 см, 0.3 кг
33.Крепление для подголовника	В x Д x Ш, масса 6 x 6 x 1 см, 0.2 кг
34.Крепление для подголовника Anatomic sits	Д x Ш x В, масса 5 x 5 x 5 см, 0.3 кг
35.Верхний крепежный кронштейн, удлинённый	Д x В x Ш, масса 12 x 5 x 0.5, 0.2 кг
36.Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro	В x Д x Ш, масса 4 x 5 x 0.5, 0.2 кг
37.Нижний крепежный кронштейн	В x Д x Ш, масса 4 x 5 x 0.5, 0.2 кг
38.Грудной ремень Х-образный Pro	Ш x Д, масса Размер 1 (XS): 20x26 см, 200 г Размер 2 (S): 21x31 см, 200 г Размер 3(M): 25x37 см, 200 г Размер 4 (L): 33x50 см, 200 г

39.Грудной ремень Х-образный Exclusive	Ш х Д, масса Размер 1 (XS): 20х26 см, 200 г Размер 2 (S): 21х31 см, 200 г Размер 3(M): 25х37 см, 200 г Размер 4 (L): 33х50 см, 200 г
40.Грудной ремень Н-образный Pro	Размер одной половины – Ш х Д, масса: Размер 1 (XS): 8,5х19,5 см, 200 г Размер 2 (S): 10х31,5 см, 200 г Размер 3 (M): 11,5х39,5 см, 200 г Размер 4 (L): 11,5х46 см, 200 г
41.Грудной ремень Н-образный Exclusive	Размер одной половины – Ш х Д, масса: Размер 1 (XS): 8,5х19,5 см, 200 г Размер 2 (S): 10х31,5 см, 200 г Размер 3 (M): 11,5х39,5 см, 200 г Размер 4 (L): 11,5х46 см, 200 г
42.Грудной ремень Zitzi Delfi Pro	Д х В х Ш, масса 30 х 6 х 1 см, 200 г
43.Грудной ремень Soft Pro	Д х В х Ш, масса Размер 1 (детский): 20 х 6 х 1, 200 г Размер 2 (взрослый): 40 х 6 х 1, 250 г
44.Бедренный ремень Pro	Д х Ш, масса Размер 1 (XS): 25 х 6 см, 200 г Размер 2 (S): 30 х 6 см, 200 г Размер 3 (M): 35 х 6 см, 200 г Размер 4 (L): 40 х 6 см, 200 г
45.Бедренный ремень Comfort Pro	Д х Ш, масса Размер 1(S): 30х6 см, 250 г Размер 2 (M): 35х6 см, 200 г Размер 3 (L): 40х6 см, 200 г
46.Бедренный ремень Exclusive	Д х Ш, масса Размер 1(S): 30х6 см, 200 г Размер 2 (M): 35х6 см, 200 г
47.Бедренный антитротационный ремень	Д х Ш, масса Размер 1 (XS): 25 х 6 см, 200 г Размер 2 (S): 30 х 6 см, 200 г Размер 3 (M): 35 х 6 см, 200 г Размер 4 (L): 40 х 6 см, 200 г
48.Фиксатор голеностопа Exclusive	Размер 1 (S): длина не более 30 см (обхват голеностопа 16-24 см), 300 г Размер 2 (M): длина не более 35 см (обхват голеностопа 22-28 см), 300 г Размер 3 (L): длина не более 40 см (обхват голеностопа 26-32 см), 300 г
49.Фиксатор голеностопа Soft	Размер 1 (S): длина не более 30 см (обхват голеностопа 16-24 см), 300 г Размер 2 (M): длина не более 35 см (обхват голеностопа 22-28 см), 300 г Размер 3 (L): длина не более 40 см (обхват голеностопа 26-32 см), 300 г
50.Фиксатор голеностопа Pro	Размер 1 (S): длина не более 30 см (обхват голеностопа 16-24 см), 300 г Размер 2 (M): длина не более 35 см (обхват голеностопа

	22-28 см), 300 г Размер 3 (L): длина не более 40 см (обхват голеностопа 26-32 см), 300 г
51.Ремень для ступней	Размер 1 (S): длина не более 52 см, 300 г Размер 2 (L): длина не более 70 см, 300 г
52.Поддержка таза	Д х В х Ш, масса Размер 1 (S): 25 х 8 х 1 см, 300 г Размер 2 (L): 30 х 8 х 1 см, 300 г
53.Фиксатор кисти Exclusive	Размер 1 (S): длина ладони 0-10 см Размер 2 (M): длина ладони 10-15 см Размер 3 (L): длина ладони 16-22 см
54.Браслет	Ш х Д, масса Размер 1 (S) - 5х16 см, 300 г Размер 2 (L) - 5х20 см, 300 г
55.Браслет Soft	Ш х Д, масса Размер 1 (S) - 5х16 см, 300 г Размер 2 (L) - 5х20 см, 300 г
56.Ремни для ног	Д х В х Ш, масса Размер 1(S): 15 х 5 х 1, 200 г Размер 2 (L): 19 х 5 х 1, 200 г
57.Подлокотник	Д х Ш х В, масса Размер 1: 18х6,6х14-20,5; 300 г Размер 2: 19,5х7,5х14-20,5; 300 г Размер 3: 23х9х19-28; 300 г
58.Подлокотник Guppy	Д х Ш х В, масса 40 х 15 х 10 см, 4 кг
59.Подлокотник Zitzi Sharky Pro	Д х Ш, масса Размер 1: 26,5 х 9,5 см, 5 кг Размер 2: 30,5 х 9,5 см, 5 кг
60.Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный	Д х Ш, масса Размер 1: 26,5 х 9,5 см, 5 кг Размер 2: 30,5 х 9,5 см, 5 кг
61.Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной	Д х Ш, масса Размер 1: 26,5 х 9,5 см, 5 кг Размер 2: 30,5 х 9,5 см, 5 кг
62.Опора для предплечья	В х Д х Ш, масса 12 х 15 х 1 см, 1 кг
63.Покрывало опоры для предплечья	Д х В х Ш, масса 12 х 15 х 1 см, 200 г
64.Подлокотная опора	Д х В х Ш, масса Размер 1: 20 х 5 х 2 см, 200 г Размер 2: 22 х 5 х 2 см, 200 г Размер 3: 24 х 5 х 2 см, 200 г
65.Крепежи опоры для предплечья левый/правый	Д х В х Ш, масса 15 х 5 х 1 см, 500 г
66.Крепеж подлокотника Guppy	Д х В х Ш, масса 15 х 8 х 5 см, 1 кг
67.Крепеж подлокотника складной	Д х Ш х В, масса 30 х 8 х 15 см, 3,5 кг
68.Крепеж подлокотника фиксированный	Д х Ш х В, масса 30 х 8 х 15 см, 3,5 кг

69.Крепежи подлокотника, правый / левый	Д х Ш х В, масса 35 х 8 х 15 см, 4 кг
70.Столик Zitzi Delfi Pro	Д х Ш, масса Размер 1: 47,5х44 см, 1,2 кг Размер 2: 53,5х50 см, 1,2 кг Размер 3: 53,5х51 см, 1,3 кг
71.Столик Zitzi Sharky Pro	Д х Ш, масса Размер 1: 67х60 см, 1,5 кг Размер 2: 67х65 см, 1,5 кг
72.Столик откидной Zitzi Delfi Pro	Д х Ш, масса Размер 2: 53,5х50 см, 1,2 кг Размер 3: 53,5х51 см, 1,3 кг
73.Столик откидной Zitzi Sharky Pro	Д х Ш, масса Размер 1: 67х60 см, 1,5 кг Размер 2: 67х65 см, 1,5 кг
74.Столик с усилен. крепежами Zitzi Delfi Pro	Д х Ш, масса Размер 2: 53,5х50 см, 1,2 кг Размер 3: 53,5х51 см, 1,3 кг
75.Столик с усилен. крепежами Zitzi Sharky Pro	Д х Ш, масса Размер 1: 67х60 см, 1,5 кг Размер 2: 67х65 см, 1,5 кг
76.Защитное покрытие на столик	В х Д х Ш, масса Размер 1: 60х50 см, 0,2кг Размер 2: 66х56 см, 0,3кг
77.Крепеж столика, складной	Д х Ш, масса Размер 1: 50х10 см, 1,5 кг Размер 2: 60х10 см, 1,8 кг
78.Крепеж столика усиленный, складной	Д х Ш, масса 50х40 см, 2 кг
79.Запорные устройства для столика, правое и левое	12х5х1 см, 0,5 кг
80.Столик Carseat Pro	Д х Ш х В, масса 15х5х1 см, 0,2 кг
81.Столик Pengy	Д х Ш, масса 35х25, 3 кг
82.Подножка Carseat Pro	Д х Ш, масса 30х20 см, 0,2 кг
83.Единая подножка Zitzi Delfi Pro	Д х Ш, масса Размер 1: 31,5х19,5 см, 1 кг Размер 2: 34,5х22,5 см, 1 кг Размер 3: 38х26 см, 1 кг
84.Единая подножка Pengy	Д х Ш, масса 25х20см, 1 кг
85.Единая подножка Seabass Pro	Д х Ш, масса Размер 1, 2 30х20см, 1,5 кг Размер 3: 30х20см, 2кг
86.Платформа для ног	Д х Ш, масса Размер 1: 28 х19 см, 1.5 кг Размер 2: 32 х22 см, 1.6 кг

87.Регулируемая единая подножка	Д х Ш, масса Размер 1: 25х18 см, 1,5 кг Размер 2: 25х19 см, 1,8 кг Размер 3: 25х20 см, 1,8 кг
88.Откидная единая подножка	Д х Ш, масса Размер 1: 25х18 см, 1,8 кг Размер 2: 25х19 см, 1,9 кг Размер 3: 25х20 см, 1,9 кг
89.Откидная единая подножка Seabass Pro	Д х Ш, масса Размер 1: 25х18 см, 1,9 кг Размер 2: 25х19 см, 2 кг Размер 3: 25х20 см, 2 кг
90.Раздельные подножки	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5х19 см, 1,5 кг Размер 2: 16х22 см, 1,6 кг Размер 3: 18х22,5 см, 1,7 кг
91.Раздельные подножки Seabass Pro	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5х19 см, 1,5 кг Размер 2: 16х22 см, 1,6 кг Размер 3: 18х22,5 см, 1,7 кг
92.Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5х19 см, 1,5 кг Размер 2: 16х22 см, 1,6 кг
93.Регулируемые раздельные подножки	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5х19 см, 1,5 кг Размер 2: 16х22 см, 1,6 кг Размер 3: 18х22,5 см, 1,7 кг
94.Откидные раздельные подножки	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5х19 см, 1,5 кг Размер 2: 16х22 см, 1,6 кг Размер 3: 18х22,5 см, 1,7 кг
95.Откидные регулируемые подножки	Д х Ш, масса Размер 1: 25х18 см, 1,8 кг Размер 2: 25х19 см, 1,9 кг Размер 3: 25х20 см, 1,9 кг
96.Подушка для единой подножки	Д х Ш, масса Размер 1: 15х10 см, 0,2 кг Размер 2: 18х10 см, 0,2 кг Размер 3: 19х10 см, 0,2 кг
97.Подушка для раздельных подножек	Д х Ш, масса Размер 1: 20х10 см, 0,2 кг Размер 2: 22х10 см, 0,2 кг Размер 3: 24х10 см, 0,2 кг
98.Адаптер для подвижной подножки	В х Д х Ш, масса 15х4х4 см, 1 кг
99.Опора для икр, с одним держателем	Ш х Д, масса Размер 0: 9,5х11 см, 0,2 кг Размер 1: 12х14,5 см, 0,2 кг

	Размер 2: 15x16 см, 0,2 кг
100. Опора для икр, с двумя держателями	Ш x Д, масса Размер 1: 12x14,5 см, 0,2 кг Размер 2: 15x16 см, 0,2 кг Размер 3: 16x22,5 см, 0,2 кг
101. Опора для икр Pengy	Ш x Д, масса 12x14,5 см, 0,2 кг
102. Подушка для опоры для икр	Д x Ш, масса Размер 1: 16x10 см, 0,2 кг Размер 2: 15x10 см, 0,2 кг Размер 3: 16x10 см, 0,2 кг Размер 4: 16x10 см, 0,2 кг
103. Пластиковая часть опоры бедра усиленная, правая и левая	Д x Ш, масса Размер 1: 15x10 см, 0,6 кг Размер 2: 19x10 см, 0,6 кг
104. Пластиковая часть опоры бедра, правая и левая	Д x Ш, масса Размер 1: 16x10 см, 0,6 кг Размер 2: 20x10 см, 0,6 кг
105. Пластиковая часть опоры бедра, медиально/латерально +4см	Д x Ш x В, масса Размер 1: 25x12x13 см, 0,5 кг Размер 2: 30x12x13 см, 0,5 кг Размер 3: 35x12x13 см, 0,5 кг
106. Опора бедра, медиально/латерально +4 см	Д x Ш x В, масса Размер 1: 25x12x13 см, 0,6 кг Размер 2: 30x12x13 см, 0,6 кг Размер 3: 35x12x13 см, 0,6 кг
107. Покрытие опоры бедра	Д x Ш x В, масса Размер 1: 10x6x3 см, 0,1 кг Размер 2: 12x6x3 см, 0,1 кг Размер 3: 13x6x3 см, 0,1 кг
108. Покрытие опоры бедра Zitzi Sharky Pro	Д x Ш x В, масса Размер 1: 15x6x3 см, 0,1 кг Размер 2: 17x6x3 см, 0,1 кг
109. Опора для стопы, правая / левая	Д x Ш x В, масса Размер 3: 14x12x3 см, 0,5 кг Размер 4: 16x12x3 см, 0,5 кг
110. Крепеж подножек	Д x Ш x В, масса 10x5x3 см, 0,5 кг
111. Высокие бортики для подножек	Размеры, вес Размер 1: 25x34x5 мм, 1 кг Размер 2: 30x34x5 мм, 1 кг Размер 3: 35x34x5 мм, 1 кг Размер 4: 40x34x5 мм, 1 кг
112. Высокие бортики для отдельных подножек	Размеры, вес Размер 1: 25x17x5 мм, 1 кг Размер 2: 30x17x5 мм, 1 кг Размер 3: 35x17x5 мм, 1 кг Размер 4: 40x17x5 мм, 1 кг
113. Подножка МН	Д x Ш x В, масса

	14x6x2 см, 0,2 кг
114. Непромокаемое покрытие	Ш x Д x В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг
115. Подушка сиденья	Ш x Д x В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг
116. Подушка сиденья T-foam	Ш x Д x В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг
117. Подушка сиденья Coolmax	Ш x Д x В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг
118. Подушка сиденья Zitzi Sharky Pro	Ш x Д x В, масса Размер 1: 40x60x1 см, 0,5 кг Размер 2: 50x70x1 см, 0,5 кг
119. Подушка сиденья Алькантара	Ш x Д x В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг
120. Пластина адаптера	Ш x Д x В, масса Размер 1: 25x25x2 см, 2 кг Размер 2: 30x30x2 см, 3 кг Размер 3: 35x35x2 см, 3,5 кг
121. Пластина адаптера Zitzi Sharky Pro	Д x Ш x В, масса 35x30x8 см, 1 кг
122. Пластина адаптера с внешней резьбой	Д x Ш x В, масса 10x10x3 см, 2 кг
123. Адаптер сиденья	Д x Ш x В, масса Размер 1: 23x23x1 см, 1 кг Размер 2: 25x25x1 см, 1 кг
124. Адаптер сиденья	Д x Ш x В, масса 30x30x2 см, 2 кг
125. Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro	Д x Ш x В, масса 30x30x2 см, 2 кг
126. Адаптер сиденья универсальный	Д x Ш x В, масса 30x30x2 см, 2 кг
127. Адаптер сиденья Carseat Pro	Д x Ш x В, масса 35x30x10 см, 1,5 кг
128. Базовая платформа адаптера Pengy	Д x Ш x В, масса 35x30x5 см, 1 кг
129. Зимний мешок	Д x Ш x В, масса Размер 1: 100x30x2 см, 0,5 кг

	Размер 2: 110x40x2 см, 0,5 кг Размер 3: 120x45x2 см, 0,5 кг
130. Мобиль	Ш x Д, масса 40x50 см, 0,5 кг
131. Капюшон	В x Д x Ш, масса 40x50x20 см, 2 кг
132. Капюшон Pengy	В x Д x Ш, масса 100x50x80 см, 2 кг
133. Газовая пружина	Для спинки: Длина, мм, сила, Н, масса: 185мм, 200 Н, 1 кг 205мм, 300 Н, 1 кг 185мм, 500 Н, 1 кг
	Для сиденья: Длина, мм, сила, Н, масса: 365 мм, 200 Н, 1 кг 380 мм, 800 Н, 1 кг 380 мм, 1200 Н, 1 кг
134. Ручка для толкания	Размеры, масса Размер 1: 40x20x4 см, 2 кг Размер 2: 45x25x4 см, 2 кг
135. Ручка для сопровождающего лица	Размеры, масса 50x30x4 см, 2 кг
136. Ручка для сопровождающего лица	Размеры, масса 50x25x4 см, 2 кг
137. Ручка для сопровождающего лица	Размеры, масса 50x30x4 см, 2 кг
138. Ручка для сопровождающего лица	Размеры, масса 40x30x4 см, 2 кг
139. Ручки для сопровождающего лица Seabass Pro	Размеры, масса 50x3x3 см, 0,5 кг
140. Ручка М6х25	Д x Ш x В, масса 4x4x4 см, 0,2 кг
141. Педаль (для регулировки высоты)	Д x Ш x В, масса 15x7x5 см, 0,5 кг
142. Набор кронштейнов для транспортировки	Д x Ш x В, масса 15x15x5 см, 2 кг
143. Ручка откидывания	Д x Ш x В, масса 20x3x2 см, 0,2 кг
144. Петля для регулировки наклона сиденья	Д x Ш x В, масса Размер 1: 15x2x2 см, 0,1 кг Размер 2: 20x2x2 см, 0,1 кг
145. Передние колеса цельнолитые Pengy	Диаметр 20 см, 30 см, масса 1 кг
146. Передние колеса цельнолитые Seabass Pro	Диаметр 15 см, 18 см, масса 1 кг

147. Передние колеса цельнолитые Guppy	Диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см, масса 1,2 кг
148. Передние колеса пневматические, 18 см	Диаметр 18 см, масса 1 кг
149. Задние колеса цельнолитые Flipper Pro Flex	Диаметр 30 см, масса 1,2 кг Диаметр 40 см, масса 1,3 кг
150. Задние колеса цельнолитые	Диаметр 30 см, масса 1,2 кг Диаметр 40 см, масса 1,3 кг Диаметр 50 см, масса 1,4 кг Диаметр 55 см, масса 1,5 кг Диаметр 60 см, масса 1,6 кг
151. Задние колеса пневматические	Диаметр 30 см, масса 1,2 кг Диаметр 40 см, масса 1,3 кг
152. Задние колеса пневматические Guppy, 40 см	Диаметр 40 см, масса 1,3 кг
153. Задние колеса пневматические Guppy	Диаметр 50 см, масса 1,4 кг Диаметр 55 см, масса 1,5 кг Диаметр 60 см, масса 1,6 кг
154. Антипрокидыватель Guppy	В x Д x Ш, масса 20x15x15 см, 1 кг
155. Антипрокидыватель правый/левый	В x Д x Ш, масса 20x15x3 см, 1 кг
156. Защита спиц	Диаметр, масса: 40 см, 0,2 кг 42 см, 0,2 кг 50 см, 0,3 кг
157. Брызговик	Д x Ш x В, масса 40x5x10 см, 0,5 кг 45x5x10 см, 0,5 кг 50x5x10 см, 0,6 кг
158. Вилка переднего колеса	В x Д x Ш, масса 8x10x5 см, 0,5 кг
159. Ось быстросъемного колеса	Размер 1: для колеса диаметром 30/40 см, Д x Ш - 98x12мм, масса 0,1 кг Размер 2: для колеса диаметром 50/60 см, Д x Ш - 103x12мм, масса 0,2 кг
160. Барабанный тормоз (правый и левый)	Размер 1: для колеса диаметром 30/40 см, Д x Ш - 10x50 мм, масса 1 кг Размер 2: для колеса диаметром 50/60 см, Д x Ш - 12x53 мм, масса 1,3 кг
161. Крепеж брызговиков	Д x Ш x В, масса Размер 1: для колес 50 см - 20x15x0,5 см, 1 кг Размер 2: для колес 55 см - 25x20x0,5 см, 1,1 кг Размер 3: для колес 60 см - 30x20x0,5 см, 1,2 кг
162. Ручка тормоза с красным стопорным механизмом	Д x Ш x В, масса 15x7x2 см, 1 кг

163. Трос ручного тормоза	Размеры, масса Seabass: 105/123 см, 0,2 кг Guppy: 125/143 см, 0,3 кг
164. Стояночные тормоза	Д x Ш x В, масса 12x7x4 см, 0,1 кг 15x7x4 см, 0,1 кг 30x4x4 см, 0,2 кг
165. Педаль тормоза Pengy, пластиковая	Д x Ш x В, масса 9x6x1 см, 0,1 кг
166. Крепление для стояночного тормоза для колес	Д x Ш x В, масса Размер 1: для колес 30/40 см - 14x3x3 см, 0,2 кг Размер 2: для колес 40 см - 20x4x3 см, 0,3 кг Размер 3: для колес 50/60 см - 22x4x3 см, 0,3 кг
167. Зубчатая муфта	Д x Ш x В, масса 6x1x1 см, 0,1 кг
168. Клин	Д x Ш x В, масса 35x15x5 см, 0,1 кг
169. Профиль спинки	Ш x Д x В, масса 8x70x1,5 см, 1 кг 8x75x1,5 см, 1,2 кг
170. Пластиковая часть спинки	Ш x Д x В, масса 40x60x3 см, 1 кг 50x70x3 см, 1,5 кг
171. Подушка спинки Zitzi Delfi Pro	Ш x Д, масса Размер 1: 40x60 см, 0,5 кг Размер 2: 50x70 см, 0,5 кг Размер 3: 25x40 см, 0,2 кг
172. Подушка спинки Carseat Pro	Ш x Д, масса Размер 2: 25x40 см, 0,2 кг Размер 3: 25x50 см, 0,2 кг
173. Подушка спинки Coolmax	Ш x Д, масса 25x35 см, 0,2 кг
174. Подушка спинки Zitzi Sharky Pro	Ш x Д, масса Размер 1: 40x60 см, 0,2 кг Размер 2: 45x70 см, 0,2 кг
175. Подушка спинки из Алькантары Zitzi Delfi Pro	Ш x Д, масса Размер 1: 40x60 см, 0,5 кг Размер 2: 50x70 см, 0,5 кг Размер 3: 25x40 см, 0,2 кг
176. Подушка спинки из Алькантары Carseat Pro	Ш x Д, масса Размер 2: 25x40 см, 0,2 кг Размер 3: 25x50 см, 0,2 кг
177. Подушка спинки из Алькантары Zitzi Sharky Pro	Ш x Д, масса Размер 1: 40x60 см, 0,2 кг Размер 2: 45x70 см, 0,2 кг
178. Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro	Д x Ш x В, масса 18x12x7 см, 0,1 кг
179. Поддержка поясницы Zitzi Sharky Pro	Ш x В x толщина, масса Размер 1: 25x50x0,5 см, 0,1 кг Размер 2: 30x60x0,5 см, 0,1 Kg
180. Пластина, регулируемая по глубине	Д x Ш x В, масса Размер 1: 15x13x0,5 см, 0,2 кг

	Размер 2: 17х15х0,5 см, 0,2 кг
181. Упор для сопровождающего лица Seabass Pro	Д х Ш х В, масса 20х6х2 см, 0,2 кг
182. Упор для сопровождающего лица Guppy	Д х Ш х В, масса 20х8х2 см, 0,2 кг
183. Корзинка	Д х Ш х В, масса 40х40х20 см, 0,3 кг
184. Дождевик	В х Д х Ш, масса 120х50х50 см, 0,1 кг
185. Вертикальная рама	Длина х ширина х глубина, масса 99х40х20 см, 10 кг 120х50х30 см, 15 кг

5. Применяемые материалы в составе кресел-колясок (которые соприкасаются с пользователем)

Таблица 19.

Наименование модели	Материалы
Zitzi Delfi Pro (модели Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro)	Спинка/сиденье: пластик ABS – (ABS+AF+SQ) Опора для ног: пластик ABS, A3100, сталь SS-2172, алюминий A3203 Подлокотник: пластик PU, YU-012 Столик: пластик PETG Обивка/подушки: Искусственный велюр – Froté inc. Trevera cs Ремни: Нейлон - PP Nylon, нейлон - Exclusive board lamin, Black Skai Рама: сталь SS-2127, алюминий A3203
Zitzi Pengy (модели Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy)	Спинка/сиденье: пластик ABS – (ABS+AF+SQ) Опора для ног: пластик ABS A3100, сталь SS-2172, алюминий A3203 Подлокотник: пластик PU YU-012 Столик: пластик PETG Обивка/подушки: Искусственный велюр – Coolmax Spacer Royal, Искусственный велюр – Froté inc. Trevera cs Ремни: Нейлон - PP Nylon Рама: сталь SS-2127, алюминий A3203
Zitzi Sharky Pro (модели Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass)	Спинка/сиденье: пластик ABS – (ABS+AF+SQ) Опора для ног: пластик ABS A3100, сталь SS-2172, алюминий A3203 Подлокотник: пластик PU YU-012 Столик: пластик PETG Обивка/подушки: искусственный велюр – Froté inc. Trevera cs Ремни: нейлон - PP Nylon, нейлон - Exclusive board lamin, Black

	Skaï Рама: сталь SS-2127, алюминий A3203
Anatomic Sits (модели Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro)	Спинка/сиденье: пластик PEHD 100 Опора для ног: пластик ABS A3100, сталь SS-2127, алюминий A3203 Подлокотник: пластик PUYU-012 Столик: пластик PETG Обивка/подушки: искусственный велюр – Froté inc. Trevera cs, искусственный велюр – Coolmax Spacer Royal Ремни: нейлон- PP Nylon Рама: сталь SS-2127, алюминий A3203
Anatomic Soft Sits (модели Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro)	Спинка/сиденье: пластик PEHD 100 Опора для ног: пластик ABS A3100, сталь SS-2127, алюминий A3203 Подлокотник: пластик PU YU-012 Столик: пластик PETG Обивка/подушки: искусственный велюр – Froté inc. Trevera cs, искусственный велюр – Coolmax Spacer Royal Ремни: нейлон - PP Nylon Рама: сталь SS-2127, алюминий A3203
Car Seat Pro	Спинка/сиденье: пластик ABS – (ABS+AF+SQ) Опора для ног: пластик ABS A3100, сталь SS-2172, алюминий A3203 Подлокотник: пластик PU YU-012 Столик: пластик PETG Обивка/подушки: Искусственный велюр – Froté inc. Trevera cs Ремни: нейлон - PP Nylon, нейлон - Exclusive board lamin, Black Skaï Рама: сталь SS-2127, алюминий A3203

Таблица 20. Применяемые материалы принадлежностей (которые соприкасаются с пользователем)

Название	Материал
Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky Pro	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky Pro	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pengy	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pengy удлиненный	
Подголовник Zitzi Sharky Pro	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Standard	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Standard удлиненный	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Mini	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Serie Adult	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Junior	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Junior Anatomic Sits	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Single	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Plush	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Plush регулируемый	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Black Bear	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник LINX Plush	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник LINX Plush регулируемый	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Carseat Pro	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Carseat Pro удлиненный	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Активная повязка для лба, Zitzi	Нейлон - PP Nylon
Активная повязка для лба, Junior, Pro Serie	Нейлон - PP Nylon
Активная повязка для лба, Adult, Pro Serie	Нейлон - PP Nylon
Грудной ремень Х-образный Pro	Нейлон - PP Nylon
Грудной ремень Х-образный Exclusive	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Грудной ремень Н-образный Pro	Нейлон - PP Nylon
Грудной ремень Н-образный Exclusive	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Грудной ремень Zitzi Delfi Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Грудной ремень Soft Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Бедренный ремень Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Бедренный ремень Comfort Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Бедренный ремень Exclusive	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Бедренный антиротационный ремень	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Фиксатор голеностопа Exclusive	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Фиксатор голеностопа Soft	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Фиксатор голеностопа Pro	Нейлон - PP Nylon
Ремень для ступней	Нейлон - PP Nylon
Поддержка таза	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Браслет	Нейлон - PP Nylon
Браслет Soft	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Ремни для ног	Нейлон - PP Nylon
Подлокотник	Пластик PU YU-012
Подлокотник Guppy	Пластик PU YU-012

Подлокотник Zitzi Sharky Pro	
Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный	Пластик PU YU-012
Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной	Пластик PU YU-012
Покрытие опоры для предплечья	Искусственная кожа HJ01
Подлокотная опора	Искусственная кожа HJ01
Столик Zitzi Delfi Pro	Пластик PETG
Столик Zitzi Sharky Pro	Пластик PU YU-012
Столик откидной Zitzi Delfi Pro	Пластик PETG
Столик откидной Zitzi Sharky Pro	Пластик PU YU-012
Столик с усилен. крепежами Zitzi Delfi Pro	Пластик - PETG
Столик с усилен. крепежами Zitzi Sharky Pro	Пластик PU YU-012
Столик Carseat Pro	Пластик - PETG
Столик Pengy	Пластик - PETG
Защитное покрытие на столик	Пластик - PETG
Крепеж столика, складной	Сталь SS-2127
Крепеж столика усиленный, складной	Сталь SS-2127
Запорные устройства для столика, правое и левое	Сталь SS-2127
Подножка Carseat Pro	Пластик ABS A3100
Единая подножка Zitzi Delfi Pro	Пластик ABS A3100
Единая подножка Pengy	Пластик ABS A3100
Единая подножка Seabass Pro	Пластик ABS A3100
Регулируемая единая подножка	Пластик ABS A3100
Откидная единая подножка	Пластик ABS A3100
Откидная единая подножка Seabass Pro	Пластик ABS A3100
Раздельные подножки	Пластик ABS A3100
Раздельные подножки Seabass Pro	Пластик ABS A3100
Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro	Пластик ABS A3100
Регулируемые раздельные подножки	Пластик ABS A3100
Откидные раздельные подножки	Пластик ABS A3100
Откидные регулируемые подножки	Пластик ABS A3100
Подушка для единой подножки	ПВХ - AZ
Подушка для раздельных подножек	ПВХ - AZ
Опора для икр, с одним держателем	Пластик ABS A3100
Опора для икр, с двумя держателями	Пластик ABS A3100
Опора для икр Pengy	Пластик ABS A3100
Подушка для опоры для икр	ПВХ - AZ
Опора для стопы левая/правая	Пластик ABS A3100
Высокие бортики для подножек	Нейлон - PP Nylon
Высокие бортики для раздельных подножек	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Платформа для ног	Пластик ABS A3100
Непромокаемое покрытие	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подушки сиденья	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подушка сиденья Coolmax	Искусственный велюр - Coolmax
Подушка сиденья Алькантара	Искусственная замша - Alcantara
Покрытие опоры бедра	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Покрытие опоры бедра Zitzi Sharky Pro	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs

Зимний мешок	Нейлон/полиэстер - PP Nylon/VS-HT100
Мобиль	Алюминий A3203
Капюшон	Нейлон - PP Nylon
Ручка для толкания	Пластик PEHD 100
Ручка для сопровождающего лица (844230, 844012, 844015)	Пластик ABS A3100
Ручки для сопровождающего лица (152172)	Пластик PEHD 100
Набор кронштейнов для транспортировки	Сталь SS-2127
Ручка откидывания	Пластик ABS A3100
Ручка тормоза с красным стопорным механизмом	Пластик ABS A3100
Стояночный тормоз	ПВХ- AZ
Подушки спинки (Zitzi Delfi Pro, Carseat Pro, Zitzi Sharky Pro)	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подушка	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подушки спинки из Алькантары	Искусственная замша - Alcantara
Корзинка	Нейлон - PP Nylon
Дождевик	Нейлон - PP Nylon
Вертикализатор	Сталь SS-2172

6. Способы очистки и дезинфекции медицинских изделий

Изделие поставляется нестерильным.

Подушки и накладки ремней можно стирать при температуре 60°, в режиме деликатной стирки. Машинная сушка запрещена. Необходимо следовать указаниям на этикетке изделия с инструкцией по уходу. Те же правила ухода относятся к ремням поддержки и бедренным ремням производства Anatomic SITT.

Пластиковые и металлические части: можно производить влажную очистку от пыли и грязи. Рекомендуется использовать биоразлагаемые моющие средства, в целях заботы об окружающей среде.

7. Применяемые стандарты

Таблица 21.

	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
1	Directive 93/42/EEC	Директива совета Европы по медицинским приборам, Приложение 2 (за исключением Секции 4)
2	SS-EN ISO 9001:2015	Системы менеджмента качества. Требования.
3	SS-EN ISO 14001:2015	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
4	ISO 10993-5:2009	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro
5	EN ISO 14971:2009	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.

6	ISO7176-5:2008	Инвалидные коляски. Определение размеров, массы и маневрирования в пространстве.
7	ISO7176-8:2014	Инвалидные коляски. Требования и методы испытаний для статического воздействия и усталостной прочности.
8	ISO7176-16:2012	Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний.
9	SS EN ISO 1021:1, 1021:2	Испытание стойкости к возгоранию, мебель. Оценка возгораемости мягкой мебели. Источник возгорания – зажженная сигарета. / Оценка возгораемости мягкой мебели. Источник возгорания– огонь или его эквиваленты.
10	ISO 15223-1:2012	Медицинские изделия – Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации.

8. Описание менеджмента риска

Менеджмент рисков в компании осуществляется согласно следующим стандартам:

- ISO14971:2007 Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.

Анализ рисков производился по следующей установленной схеме:

- Выявление возможных рисков, связанных с применением изделия по назначению
- Оценка выявленных рисков по установленной балльной системе;
- Оценка степени возможного ущерба пользователю или другому лицу, связанного с применением изделия (по установленной балльной системе);
- Рассмотрение мер по сокращению выявленных рисков;
- Оценка допустимости рисков.

В результате анализа рисков по описанному установленному алгоритму, все риски, связанные с применением кресел-колясок признаются допустимыми.

9. Биосовместимость.

Материалы, применяемые для изготовления электроколясок соответствуют требованиям ISO 10993-5:2009 по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий.

В ходе проведенных испытаний колясок признаков цитотоксичности не выявлено.

Испытания проводились согласно следующим стандартам:

- ISO 10993-5:2009 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro.

10. Описание производственного процесса

Производство и проверка медицинских изделий осуществляется в соответствии с документально оформленной системой качества, которая соответствует требованиям ISO9001, ISO14001.

Схема производственного процесса кресел-колясок для инвалидов выглядит следующим образом:



11. Упаковка и маркировка

Кресла – коляски Anatomic SITT для транспортировки упаковываются в пузырчатый полиэтилен и / или полиэтиленовую пленку, далее укладываются в коробку из картона. Некоторые составные части и принадлежности отдельно упаковываются в полиэтиленовую пленку и укладываются в коробку меньшего размера.

На каждой упаковке имеется четкая маркировка, содержащая:


- наименование изделия;
- размер изделия;
- дата изготовления (год и месяц);
- грузоподъемность;
- рекомендуемая максимальная масса пользователя;
- серийный номер;
- адрес и наименование предприятия-изготовителя или поставщика;
- символ, обозначающий соответствие требованиям Директивы ЕС 93/42/ЕЕС.

Маркировка выполнена способом, обеспечивающим устойчивость надписей к воздействию факторам внешней среды в процессе эксплуатации.

На коробку для транспортировки нанесены основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки.

Маркировка изделий соответствует ISO 15223-1:2012 (Медицинские изделия – Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации)

Пример маркировки:

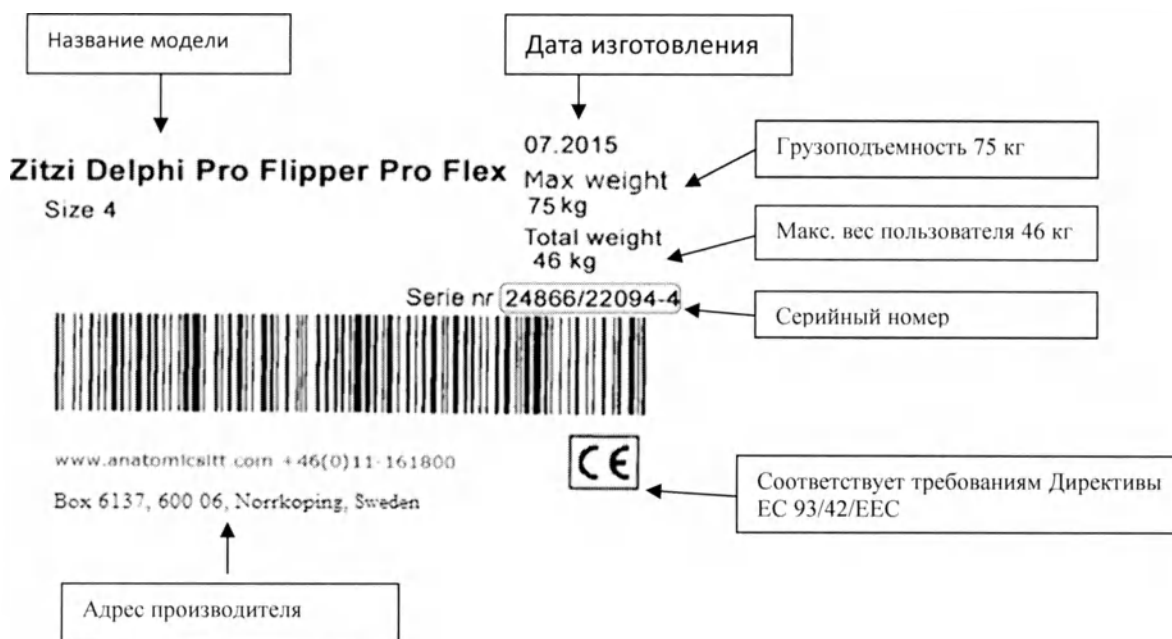

Ниже представлен макет маркировки на русском языке:



12. Условия хранения и транспортировки

- Температура хранения изделия составляет: -40°C..+65°C, влажность воздуха от 35% до 85%.

Температура эксплуатации изделия составляет -25°C..+50°C, влажность воздуха от 45% до 85%.

Для моделей, оснащенных газовой пружиной, температура хранения составляет: -25°C..+65°C, влажность воздуха от 35% до 85%, температура эксплуатации составляет -25°C..+50°C.

Продукт следует хранить в закрытых сухих помещениях с достаточной циркуляцией воздуха и защищать его от внешних воздействий.

Условия транспортировки являются аналогичными.

Срок годности – 6 лет.

13. Утилизация медицинского изделия.

Части использованного изделия должны быть сгруппированы по типу материала: металл, пластик и ткань. Утилизация материалов каждого вида проводится в соответствии с нормативными документами и требованиями для утилизации данного вида изделий, принятыми в стране распространения.

Газовая пружина относится к опасным материалам. Газовые пружины состоят главным образом из металла, который может быть переработан, но сначала необходимо стравить газовое давление. Для того чтобы стравить давление газовой пружины и сделать ее безопасной для переработки необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр.

14. Техническое обслуживание

Для всех вариантов исполнения кресел-колясок *Anatomic SITT*

Для безопасного и правильного функционирования всех моделей, рекомендуется регулярно проходить техническое обслуживание.

Необходимость обслуживания зависит от частоты использования и износа шасси, а также других составляющих. Следует контролировать все подвижные части рам и крепежи, проверять их целостность. При повреждении какой-либо части кресла-коляски, ее можно поменять.

При ремонте следует использовать только оригинальные запасные части *Anatomic SITT*.

Сервисное обслуживание всегда должно выполняться квалифицированным специалистом. По вопросам, связанным с техническим обслуживанием изделия, следует обращаться к официальному дилеру *Anatomic Sitt* в России.

Газовая пружина.

Газовая пружина должна использоваться регулярно, чтобы поддержать её функционирование. Когда кресло не используется, газовая пружина должна быть активирована, по крайней мере один раз в 6 месяцев. Кроме того, при хранении кресла необходимо убедиться, что стержень пружины расположен внизу, иначе она может перестать выполнять свою функцию.

Необходимо регулярно проверять функциональность газовой пружины.

Очистка

Окрашенные поверхности, передние и задние колеса, ручки очищаются чистящими растворами. Никогда не используйте растворители, бензин и подобные вещества.

Финальная обработка

После влажной очистки все провода, закрытые места и отверстия, должны быть вытерты насухо и обработаны маслом.

Маркировка

Убедитесь, что SE-маркировка не повреждена. Маркировка находится на задней части рамы.

Колёса

Убедитесь, что передние и задние колёса не изношены, вращаются свободно и бесшумно.

Окраска

Для предотвращения появления коррозии и царапин, проверьте целостность покраски. При необходимости Anatomic SITT AB может устранить повреждения окрашенных поверхностей рам.

Баланс и симметрия

Убедитесь, что симметрия и баланс колёс не нарушены. Для получения подробной информации о регулировках передних и задних колёс смотрите страницы 14-21 данного руководства.

Цилиндрическая рама и детали

Сварные и болтовые соединения, втулки и петли работают бесшумно. Смазывайте их при необходимости. Проверяйте ручки, винты и другие крепёжные детали. При необходимости заменяйте изношенные части.

Вилки

Убедитесь, что крепления и подшипники легко вращаются. При необходимости смазывайте передние вилки.

Ручка для сопровождающего лица

Убедитесь, что мягкое покрытие и ручки находятся в рабочем состоянии. Ручка для сопровождающего регулируется по высоте. Регулярно проверяйте состояние ручек и болтов.

Тормоза

Убедитесь, что стояночный тормоз и барабанный тормоз надёжно фиксируют коляску.

Механизм складывания (для моделей, оснащенных рамой Pengy)

Необходимо убедиться, что коляска складывается без затруднений.

Регулировка угла наклона

Необходимо убедиться, что регулирование угла наклона кресла не затруднено. Убедитесь, что угол наклона зафиксирован в верхнем и нижнем положениях.

Контроль функционирования

Контроль функционирования означает, что вы осматриваете и проверяете колёса, симметрию, тормоза.

15. Гарантийные обязательства

Гарантия на производственные дефекты действует в течение 1 (одного) года с момента даты поставки. Гарантия недействительна, если продукт был подвергнут воздействию внешних факторов или грубому обращению. Это необходимое условие, для выполнения гарантийных обязательств. Всегда прикладывайте упаковочный лист предыдущей поставки.

Необходимо как можно подробнее описать ошибку и возможную причину для гарантийной претензии. Гарантия предполагает ремонт или обмен изделия. Требуется

приложить копию счета-фактуры и сообщить, если продукт должен вернуться назад после ремонта. Указывается адрес доставки, контактное лицо и номер телефона.

Необходимо хорошо упаковать продукт, чтобы защитить его от повреждений во время перевозки. Необходимо зафиксировать идентификационный номер отправки в документации, для того чтобы отслеживать пересылку

16. Рекламация

Организация, принимающая на территории Российской Федерации претензии от потребителя по качеству продукта:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника»

ООО «Ортоника», юридический адрес: 105554, г. Москва, ул. Парковая 11-я, д. 9/35, кв. 94

Телефон: +7 (495) 641-71-77

Приложение

Кресла - коляски для инвалидов Anatomic SITT, в исполнениях, с принадлежностями:

- I. Кресла-коляски Zitzi Delfi Pro: модели Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro.

Принадлежности:

1. К модели Zitzi Delfi Pro Flipper Pro:

- 1.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.2 Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.3 Подголовник Pro Standard, размер 1, 2;
- 1.4 Подголовник Pro Standard удлиненный, размер 1, 2;
- 1.5 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 1.6 Подголовник Pro Junior;
- 1.7 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 1.8 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.9 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 1.10 Регулируемое крепление подголовника;
- 1.11 Активная повязка для лба Zitzi;
- 1.12 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 1.13 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 1.14 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.15 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 1.16 Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro;
- 1.17 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.18 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.19 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.20 Грудной ремень Zitzi Delfi Pro;
- 1.21 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 1.22 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.23 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 1.24 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.25 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 1.26 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 1.27 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.28 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.29 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 1.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L);
- 1.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L);

- 1.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.33 Опора для предплечья;
- 1.34 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 1.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.36 Столик откидной Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 1.37 Столик с усиленными крепежами Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 1.38 Защитное покрытие на столик, размер 1, 2;
- 1.39 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 1.40 Регулируемая единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 1.41 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 1.42 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.43 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.44 Откидные регулируемые подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.45 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.46 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 1.47 Адаптер для подвижной подножки;
- 1.48 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 1.49 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 1.50 Пластиковая часть опоры бедра, медиально / латерально, +4 см, размеры 1, 2, 3;
- 1.51 Опора бедра, медиально / латерально, + 4 см, размеры 1, 2, 3;
- 1.52 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 1.53 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.54 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.55 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 1.56 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 1.57 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 1.58 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 1.59 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 1.60 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 1.61 Адаптер сиденья;
- 1.62 Адаптер сиденья 285175;
- 1.63 Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro;
- 1.64 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 1.65 Мобиль;
- 1.66 Капюшон;
- 1.67 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 1.68 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 1.69 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 1.70 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 1.71 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 1.72 Педаль (для регулировки высоты);
- 1.73 Подушка спинки Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.74 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Delfi Pro;
- 1.75 Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro

2. К модели Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex:

- 2.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.2 Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.3 Подголовник Pro Standard, размер 1, 2;
- 2.4 Подголовник Pro Standard удлинённый, размер 1, 2;
- 2.5 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 2.6 Подголовник Pro Junior;
- 2.7 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 2.8 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.9 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 2.10 Регулируемое крепление подголовника;
- 2.11 Активная повязка для лба Zitzi;
- 2.12 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 2.13 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 2.14 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.15 Верхний крепежный кронштейн, удлинённый;
- 2.16 Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro;
- 2.17 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.18 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.19 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.20 Грудной ремень Zitzi Delfi Pro;
- 2.21 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 2.22 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.23 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 2.24 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.25 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 2.26 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 2.27 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.28 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 2.29 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 2.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 2.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 2.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 2.33 Опора для предплечья;
- 2.34 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 2.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.36 Столик откидной Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 2.37 Столик с усиленными крепежами Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 2.38 Защитное покрытие на столик, размер 1, 2;
- 2.39 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 2.40 Регулируемая единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 2.41 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 2.42 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.43 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;

- 2.44 Откидные регулируемые подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.45 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.46 Подушка для отдельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 2.47 Адаптер для подвижной подножки;
- 2.48 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 2.49 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 2.50 Пластиковая часть опоры бедра, медиально / латерально, +4 см, размеры 1, 2, 3;
- 2.51 Опора бедра, медиально / латерально, + 4 см, размеры 1, 2, 3;
- 2.52 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 2.53 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.54 Высокие бортики для отдельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.55 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 2.56 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 2.57 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 2.58 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 2.59 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 2.60 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 2.61 Адаптер сиденья 285175;
- 2.62 Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro;
- 2.63 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 2.64 Мобиль;
- 2.65 Капюшон;
- 2.66 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 2.67 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 2.68 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 2.69 Ручка для сопровождающего лица 844230;
- 2.70 Ручка для сопровождающего лица 844012;
- 2.71 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 2.72 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 2.73 Педаль (для регулировки высоты);
- 2.74 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 2.75 Задние колеса цельнолитные Flipper Pro Flex, диаметр 30 см, 40 см;
- 2.76 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 2.77 Подушка спинки Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.78 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Delfi Pro;
- 2.79 Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro

3. К модели Zitzi Delfi Pro Snapper:

- 3.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.2 Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.3 Подголовник Pro Standard, размер 1, 2;
- 3.4 Подголовник Pro Standard удлиненный, размер 1, 2;

- 3.5 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 3.6 Подголовник Pro Junior;
- 3.7 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 3.8 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.9 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 3.10 Регулируемое крепление подголовника;
- 3.11 Активная повязка для лба Zitzi;
- 3.12 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 3.13 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 3.14 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.15 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 3.16 Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro;
- 3.17 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.18 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.19 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.20 Грудной ремень Zitzi Delfi Pro;
- 3.21 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 3.22 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.23 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 3.24 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.25 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 3.26 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 3.27 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.28 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 3.29 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 3.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 3.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 3.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 3.33 Опора для предплечья;
- 3.34 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 3.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.36 Столик откидной Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 3.37 Столик с усиленными крепежами Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 3.38 Защитное покрытие на столик, размер 1, 2;
- 3.39 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 3.40 Регулируемая единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 3.41 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 3.42 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.43 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.44 Откидные регулируемые подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.45 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.46 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 3.47 Адаптер для подвижной подножки;
- 3.48 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 3.49 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;

- 3.50 Пластиковая часть опоры бедра, медиально / латерально, +4 см, размеры 1, 2, 3;
- 3.51 Опора бедра, медиально / латерально, + 4 см, размеры 1, 2, 3;
- 3.52 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 3.53 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.54 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.55 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 3.56 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 3.57 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 3.58 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 3.59 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 3.60 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 3.61 Адаптер сиденья 285175;
- 3.62 Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro;
- 3.63 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 3.64 Мобиль;
- 3.65 Капюшон;
- 3.66 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 3.67 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 3.68 Ручка для сопровождающего лица 844015;
- 3.69 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 3.70 Подушка спинки Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.71 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Delfi Pro;
- 3.72 Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro

4. К модели Zitzi Delfi Pro Pengy:

- 4.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.2 Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.3 Подголовник Pro Standard, размер 1, 2;
- 4.4 Подголовник Pro Standard удлиненный, размер 1, 2;
- 4.5 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 4.6 Подголовник Pro Junior;
- 4.7 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 4.8 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.9 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 4.10 Регулируемое крепление подголовника;
- 4.11 Активная повязка для лба Zitzi;
- 4.12 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 4.13 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 4.14 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.15 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 4.16 Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro;
- 4.17 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;

- 4.18 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.19 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.20 Грудной ремень Zitzi Delfi Pro;
- 4.21 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 4.22 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.23 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 4.24 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.25 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 4.26 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 4.27 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.28 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 4.29 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 4.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 4.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 4.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 4.33 Опора для предплечья;
- 4.34 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 4.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.36 Столик откидной Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 4.37 Столик с усиленными крепежами Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 4.38 Защитное покрытие на столик, размер 1, 2;
- 4.39 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 4.40 Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
- 4.41 Регулируемая единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 4.42 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 4.43 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.44 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.45 Откидные регулируемые подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.46 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.47 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 4.48 Адаптер для подвижной подножки;
- 4.49 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 4.50 Опора для икр Pengy;
- 4.51 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 4.52 Пластиковая часть опоры бедра, медиально / латерально, +4 см, размеры 1, 2, 3;
- 4.53 Опора бедра, медиально / латерально, + 4 см, размеры 1, 2, 3;
- 4.54 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 4.55 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.56 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.57 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 4.58 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 4.59 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 4.60 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 4.61 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;

- 4.62 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 4.63 Адаптер сиденья 285175;
- 4.64 Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro;
- 4.65 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 4.66 Мобиль;
- 4.67 Капюшон;
- 4.68 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 4.69 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 4.70 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 4.71 Передние колеса цельнолитные Pengy, диаметр 20 см, 30 см;
- 4.72 Передние колеса цельнолитные Guppy, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
- 4.73 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 4.74 Педаль тормоза Pengy, пластиковая;
- 4.75 Подушка спинки Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.76 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Delfi Pro;
- 4.77 Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro;
- 4.78 Корзинка
- 4.79 Набор кронштейнов для транспортировки

5. К модели Zitzi Delfi Pro Guppy:

- 5.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.2 Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.3 Подголовник Pro Standard, размер 1, 2;
- 5.4 Подголовник Pro Standard удлиненный, размер 1, 2;
- 5.5 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 5.6 Подголовник Pro Junior;
- 5.7 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 5.8 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.9 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 5.10 Регулируемое крепление подголовника;
- 5.11 Активная повязка для лба Zitzi;
- 5.12 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 5.13 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 5.14 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.15 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 5.16 Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro;
- 5.17 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.18 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.19 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.20 Грудной ремень Zitzi Delfi Pro;
- 5.21 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 5.22 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.23 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;

- 5.24 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.25 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 5.26 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 5.27 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.28 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 5.29 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 5.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 5.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 5.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 5.33 Подлокотник Guppy;
- 5.34 Опора для предплечья;
- 5.35 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 5.36 Крепеж подлокотника Guppy;
- 5.37 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.38 Столик откидной Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 5.39 Столик с усиленными крепежами Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 5.40 Защитное покрытие на столик, размер 1, 2;
- 5.41 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 5.42 Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
- 5.43 Регулируемая единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 5.44 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 5.45 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.46 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.47 Откидные регулируемые подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.48 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.49 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 5.50 Адаптер для подвижной подножки;
- 5.51 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 5.52 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 5.53 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 5.54 Пластиковая часть опоры бедра, медиально / латерально, +4 см, размеры 1, 2, 3;
- 5.55 Опора бедра, медиально / латерально, + 4 см, размеры 1, 2, 3;
- 5.56 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 5.57 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.58 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.59 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 5.60 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 5.61 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 5.62 Подушка сиденья Алькоantara, размеры 1, 2, 3;
- 5.63 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 5.64 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 5.65 Адаптер сиденья;
- 5.66 Адаптер сиденья 285175;
- 5.67 Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro;

- 5.68 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 5.69 Мобиль;
- 5.70 Капюшон;
- 5.71 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 5.72 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 5.73 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 5.74 Набор кронштейнов для транспортировки;
- 5.75 Ручка откидывания;
- 5.76 Передние колеса цельнолитные Guppy, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
- 5.77 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.78 Задние колеса пневматические, диаметр 30 см, 40 см;
- 5.79 Задние колеса пневматические Guppy, 40 см;
- 5.80 Задние колеса пневматические Guppy, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.81 Антипрокидыватель Guppy; Защита спиц, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.82 Вилка переднего колеса;
- 5.83 Ось быстросъемного колеса, размер 1, 2;
- 5.84 Барабанный тормоз левый/правый, размер 1, 2;
- 5.85 Крепеж брызговиков, размер 1, 2, 3;
- 5.86 Ручка тормоза с красным стопорным механизмом;
- 5.87 Трос ручного тормоза, Seabass, Guppy;
- 5.88 Стояночные тормоза;
- 5.89 Крепление для стояночного тормоза для колес, размер 1, 2, 3;
- 5.90 Крепеж стояночного тормоза;
- 5.91 Зубчатая муфта;
- 5.92 Подушка спинки Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.93 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Delfi Pro;
- 5.94 Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro;
- 5.95 Упор для сопровождающего лица Guppy.

6. К модели Zitzi Delfi Pro Seabass Pro:

- 6.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.2 Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.3 Подголовник Pro Standard, размер 1, 2;
- 6.4 Подголовник Pro Standard удлиненный, размер 1, 2;
- 6.5 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 6.6 Подголовник Pro Junior;
- 6.7 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 6.8 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.9 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 6.10 Регулируемое крепление подголовника;
- 6.11 Активная повязка для лба Zitzi;
- 6.12 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 6.13 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;

- 6.14 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.15 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 6.16 Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro;
- 6.17 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.18 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.19 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.20 Грудной ремень Zitzi Delfi Pro;
- 6.21 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 6.22 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.23 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 6.24 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.25 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 6.26 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 6.27 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.28 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 6.29 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 6.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 6.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L);
- 6.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 6.33 Подлокотник, размеры 1, 2, 3;
- 6.34 Опора для предплечья;
- 6.35 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 6.36 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.37 Столик откидной Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 6.38 Столик с усиленными крепежами Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 6.39 Защитное покрытие на столик, размер 1, 2;
- 6.40 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.41 Единая подножка Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.42 Регулируемая единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 6.43 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 6.44 Откидная единая подножка Seabass Pro;
- 6.45 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.46 Раздельные подножки Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.47 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.48 Откидные раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.49 Откидные регулируемые подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.50 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.51 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 6.52 Адаптер для подвижной подножки;
- 6.53 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 6.54 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 6.55 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 6.56 Пластиковая часть опоры бедра, медиально / латерально, +4 см, размеры 1, 2, 3;
- 6.57 Опора бедра, медиально / латерально, + 4 см, размеры 1, 2, 3;
- 6.58 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;

- 6.59 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.60 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.61 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 6.62 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 6.63 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 6.64 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 6.65 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 6.66 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 6.67 Адаптер сиденья;
- 6.68 Адаптер сиденья 285175;
- 6.69 Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro;
- 6.70 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 6.71 Мобиль;
- 6.72 Капюшон;
- 6.73 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 6.74 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 6.75 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 6.76 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 6.77 Ручка для сопровождающего лица Seabass Pro;
- 6.78 Набор кронштейнов для транспортировки;
- 6.79 Ручка откидывания;
- 6.80 Передние колеса цельнолитные Seabass Pro, диаметр 15 см, 18 см; Передние колеса пневматические, 18 см;
- 6.81 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 6.82 Задние колеса пневматические, диаметр 30 см, 40 см;
- 6.83 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 6.84 Защита спиц, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 6.85 Брызговик, размер 1, 2, 3;
- 6.86 Ручка тормоза с красным стопорным механизмом;
- 6.87 Трос ручного тормоза, Seabass, Guppy;
- 6.88 Стояночные тормоза;
- 6.89 Крепление для стояночного тормоза для колес, размер 1, 2, 3;
- 6.90 Крепеж стояночного тормоза;
- 6.91 Подушка спинки Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.92 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Delfi Pro;
- 6.93 Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro;
- 6.94 Упор для сопровождающего лица Seabass Pro

II. Кресла-коляски Zitzi Pengy: модели Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy

Принадлежности:

- 1. К модели Zitzi Pengy Flipper Pro:

- 1.1 Подголовник Pengy, размер 1, 2;
- 1.2 Подголовник Pengy удлиненный, размер 1, 2;
- 1.3 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.4 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.5 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.6 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.7 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.8 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.9 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 1.10 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.11 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 1.12 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 1.13 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.14 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 1.15 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 1.16 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 1.17 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.18 Столик Pengy;
- 1.19 Единая подножка Pengy;
- 1.20 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 1.21 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 1.22 Подножка МН;
- 1.23 Базовая платформа адаптера Pengy;
- 1.24 Капюшон Pengy;
- 1.25 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 1.26 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 1.27 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 1.28 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 1.29 Педаль (для регулировки высоты);
- 1.30 Подушка спинки Coolmax;
- 1.31 Дождевик

2. К модели Zitzi Pengy Flipper Pro Flex:

- 2.1 Подголовник Pengy, размер 1, 2;
- 2.2 Подголовник Pengy удлиненный, размер 1, 2;
- 2.3 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.4 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.5 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.6 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.7 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.8 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.9 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;

- 2.10 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.11 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 2.12 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 2.13 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.14 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 2.15 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 2.16 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 2.17 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 2.18 Столик Pengy;
- 2.19 Единая подножка Pengy;
- 2.20 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 2.21 Покрывало опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 2.22 Подножка МН;
- 2.23 Базовая платформа адаптера Pengy;
- 2.24 Капюшон Pengy;
- 2.25 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 2.26 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 2.27 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 2.28 Ручка для сопровождающего лица 844230;
- 2.29 Ручка для сопровождающего лица 844012;
- 2.30 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 2.31 Педаль (для регулировки высоты);
- 2.32 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 2.33 Задние колеса цельнолитные Flipper Pro Flex, диаметр 30 см, 40 см;
- 2.34 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 2.35 Подушка спинки Coolmax;
- 2.36 Дождевик

3. К модели Zitzi Pengy Snapper:

- 3.1 Подголовник Pengy, размер 1, 2;
- 3.2 Подголовник Pengy удлиненный, размер 1, 2;
- 3.3 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.4 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.5 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.6 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.7 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.8 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.9 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 3.10 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.11 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 3.12 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 3.13 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.14 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L) ;

- 3.15 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 3.16 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 3.17 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 3.18 Столик Pengy;
- 3.19 Единая подножка Pengy;
- 3.20 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 3.21 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 3.22 Подножка МН;
- 3.23 Базовая платформа адаптера Pengy;
- 3.24 Капюшон Pengy;
- 3.25 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 3.26 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 3.27 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 3.28 Ручка для сопровождающего лица 844015;
- 3.29 Подушка спинки Coolmax;
- 3.30 Дождевик

4. К модели Zitzi Pengy Pengy:

- 4.1 Подголовник Pengy, размер 1, 2;
- 4.2 Подголовник Pengy удлиненный, размер 1, 2;
- 4.3 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.4 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.5 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.6 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.7 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.8 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.9 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 4.10 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.11 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 4.12 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 4.13 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.14 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 4.15 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 4.16 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 4.17 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 4.18 Столик Pengy;
- 4.19 Единая подножка Pengy;
- 4.20 Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
- 4.21 Опора для икр Pengy;
- 4.22 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 4.23 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 4.24 Подножка МН;
- 4.25 Базовая платформа адаптера Pengy;

- 4.26 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 4.27 Капюшон Pengy;
- 4.28 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 4.29 Передние колеса цельнолитные Pengy, диаметр 20 см, 30 см;
- 4.30 Передние колеса цельнолитные Guppy, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
- 4.31 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 4.32 Педаль тормоза Pengy, пластиковая;
- 4.33 Подушка спинки Coolmax;
- 4.34 Корзинка;
- 4.35 Дождевик

III. Кресла-коляски Zitzi Sharky Pro: модели Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro.

Принадлежности:

1. К модели Zitzi Sharky Pro Flipper Pro:

- 1.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.2 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.3 Боковая поддержка откидная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.4 Усиленная основа боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.5 Крепеж боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, складной;
- 1.6 Подголовник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 2 удлиненный;
- 1.7 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 1.8 Подголовник Pro Serie Adult;
- 1.9 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.10 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 1.11 Подголовник Black Bear, размеры – стандартный, удлиненный;
- 1.12 Регулируемое крепление подголовника;
- 1.13 Активная повязка для лба Zitzi;
- 1.14 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 1.15 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 1.16 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 1.17 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.18 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 1.19 Нижний крепежный кронштейн;
- 1.20 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.21 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.22 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.23 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 1.24 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.25 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;

- 1.26 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 1.27 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.28 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 1.29 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 1.30 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.31 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.32 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 1.33 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 1.34 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 1.35 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.36 Ремни для ног, размер 1, 2;
- 1.37 Подлокотник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.38 Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный, размер 1, 2;
- 1.39 Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной, размер 1, 2;
- 1.40 Опора для предплечья;
- 1.41 Покрытие опоры для предплечья;
- 1.42 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 1.43 Крепежи опоры для предплечья левый/правый;
- 1.44 Крепеж подлокотника складной;
- 1.45 Крепеж подлокотника фиксированный;
- 1.46 Крепеж подлокотника, левый/правый;
- 1.47 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.48 Столик откидной Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.49 Столик с усиленными крепежами Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.50 Крепеж столика, складной;
- 1.51 Крепеж столика усиленный, складной;
- 1.52 Запорное устройство для столика левое/правое;
- 1.53 Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 1.54 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.55 Откидные раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.56 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 1.57 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 1.58 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 1.59 Пластиковая часть опоры бедра усиленная, правая и левая, размеры 1, 2;
- 1.60 Пластиковая часть опоры бедра, левая / правая, размеры 1, 2;
- 1.61 Покрытие опоры бедра Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.62 Опора для стопы левая/правая, размер 1, 2;
- 1.63 Крепеж подножек;
- 1.64 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 1.65 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 1.66 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 1.67 Подушка сиденья Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 1.68 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 1.69 Пластина адаптера Sharky Pro;
- 1.70 Пластина адаптера с внешней резьбой;

- 1.71 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 1.72 Капюшон;
- 1.73 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 1.74 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 1.75 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 1.76 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 1.77 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 1.78 Ручка М6х25;
- 1.79 Педаль (для регулировки высоты);
- 1.80 Петля для регулировки наклона сиденья, размеры 1, 2;
- 1.81 Профиль спинки, размер 1, 2;
- 1.82 Пластиковая часть спинки, размер 1, 2;
- 1.83 Подушка спинки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 1.84 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.85 Поддержка поясницы Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.86 Пластина, регулируемая по глубине, размер 1, 2

2. К модели Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex:

- 2.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.2 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.3 Боковая поддержка откидная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.4 Усиленная основа боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.5 Крепеж боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, складной;
- 2.6 Подголовник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 2 удлинённый;
- 2.7 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 2.8 Подголовник Pro Serie Adult;
- 2.9 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.10 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 2.11 Подголовник Black Bear, размеры – стандартный, удлинённый;
- 2.12 Регулируемое крепление подголовника;
- 2.13 Активная повязка для лба Zitzi;
- 2.14 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 2.15 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 2.16 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 2.17 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.18 Верхний крепежный кронштейн, удлинённый;
- 2.19 Нижний крепежный кронштейн;
- 2.20 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.21 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.22 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.23 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 2.24 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.25 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.26 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;

- 2.27 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.28 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 2.29 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 2.30 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.31 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 2.32 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 2.33 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 2.34 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 2.35 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 2.36 Ремни для ног, размер 1, 2;
- 2.37 Подлокотник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.38 Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный, размер 1, 2;
- 2.39 Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной, размер 1, 2;
- 2.40 Опора для предплечья;
- 2.41 Покрытие опоры для предплечья;
- 2.42 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 2.43 Крепежи опоры для предплечья левый/правый;
- 2.44 Крепеж подлокотника складной;
- 2.45 Крепеж подлокотника фиксированный;
- 2.46 Крепеж подлокотника, левый/правый;
- 2.47 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.48 Столик откидной Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.49 Столик с усиленными крепежами Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.50 Крепеж столика, складной;
- 2.51 Крепеж столика усиленный, складной;
- 2.52 Запорное устройство для столика левое/правое;
- 2.53 Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 2.54 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.55 Откидные раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.56 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 2.57 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 2.58 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 2.59 Пластиковая часть опоры бедра усиленная, правая и левая, размеры 1, 2;
- 2.60 Пластиковая часть опоры бедра, левая / правая, размеры 1, 2;
- 2.61 Покрытие опоры бедра Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.62 Опора для стопы левая/правая, размер 1, 2;
- 2.63 Крепеж подножек;
- 2.64 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 2.65 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 2.66 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 2.67 Подушка сиденья Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 2.68 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 2.69 Пластина адаптера Sharky Pro;
- 2.70 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 2.71 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;

- 2.72 Капюшон;
- 2.73 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 2.74 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 2.75 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 2.76 Ручка для сопровождающего лица 844230;
- 2.77 Ручка для сопровождающего лица 844012;
- 2.78 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 2.79 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 2.80 Ручка М6х25;
- 2.81 Педаль (для регулировки высоты);
- 2.82 Петля для регулировки наклона сиденья, размеры 1, 2;
- 2.83 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 2.84 Задние колеса цельнолитные Flipper Pro Flex, диаметр 30 см, 40 см;
- 2.85 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 2.86 Профиль спинки, размер 1, 2;
- 2.87 Пластиковая часть спинки, размер 1, 2;
- 2.88 Подушка спинки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 2.89 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.90 Поддержка поясницы Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.91 Пластина, регулируемая по глубине, размер 1, 2

3. К модели Zitzi Sharky Pro Snapper:

- 3.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.2 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.3 Боковая поддержка откидная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.4 Усиленная основа боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.5 Крепеж боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, складной;
- 3.6 Подголовник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 2 удлиненный;
- 3.7 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 3.8 Подголовник Pro Serie Adult;
- 3.9 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.10 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 3.11 Подголовник Black Bear, размеры – стандартный, удлиненный;
- 3.12 Регулируемое крепление подголовника;
- 3.13 Активная повязка для лба Zitzi;
- 3.14 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 3.15 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 3.16 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 3.17 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.18 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 3.19 Нижний крепежный кронштейн;
- 3.20 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.21 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;

- 3.22 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.23 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 3.24 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.25 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.26 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 3.27 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.28 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 3.29 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 3.30 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.31 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 3.32 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 3.33 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L);
- 3.34 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 3.35 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 3.36 Ремни для ног, размер 1, 2;
- 3.37 Подлокотник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.38 Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный, размер 1, 2;
- 3.39 Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной, размер 1, 2;
- 3.40 Опора для предплечья;
- 3.41 Покрытие опоры для предплечья;
- 3.42 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 3.43 Крепежи опоры для предплечья левый/правый;
- 3.44 Крепеж подлокотника складной;
- 3.45 Крепеж подлокотника фиксированный;
- 3.46 Крепеж подлокотника, левый/правый;
- 3.47 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.48 Столик откидной Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.49 Столик с усиленными крепежами Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.50 Крепеж столика, складной;
- 3.51 Крепеж столика усиленный, складной;
- 3.52 Запорное устройство для столика левое/правое;
- 3.53 Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 3.54 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.55 Откидные раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.56 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 3.57 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 3.58 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 3.59 Пластиковая часть опоры бедра усиленная, правая и левая, размеры 1, 2;
- 3.60 Пластиковая часть опоры бедра, левая / правая, размеры 1, 2;
- 3.61 Покрытие опоры бедра Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.62 Опора для стопы левая/правая, размер 1, 2;
- 3.63 Крепеж подножек;
- 3.64 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 3.65 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 3.66 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;

- 3.67 Подушка сиденья Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 3.68 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 3.69 Пластина адаптера Sharky Pro;
- 3.70 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 3.71 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 3.72 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 3.73 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 3.74 Капюшон;
- 3.75 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 3.76 Ручка для сопровождающего лица 844015;
- 3.77 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 3.78 Ручка М6х25;
- 3.79 Петля для регулировки наклона сиденья, размеры 1, 2;
- 3.80 Профиль спинки, размер 1, 2;
- 3.81 Пластиковая часть спинки, размер 1, 2;
- 3.82 Подушка спинки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 3.83 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.84 Поддержка поясницы Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.85 Пластина, регулируемая по глубине, размер 1, 2

4. К модели Zitzi Sharky Pro Seabass Pro:

- 4.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.2 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.3 Боковая поддержка откидная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.4 Усиленная основа боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.5 Крепеж боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, складной;
- 4.6 Подголовник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 2 удлиненный;
- 4.7 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 4.8 Подголовник Pro Serie Adult;
- 4.9 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.10 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 4.11 Подголовник Black Bear, размеры – стандартный, удлиненный;
- 4.12 Регулируемое крепление подголовника;
- 4.13 Активная повязка для лба Zitzi;
- 4.14 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 4.15 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 4.16 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 4.17 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.18 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 4.19 Нижний крепежный кронштейн;
- 4.20 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.21 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.22 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;

- 4.23 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 4.24 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.25 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.26 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 4.27 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.28 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 4.29 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 4.30 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.31 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 4.32 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 4.33 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 4.34 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 4.35 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 4.36 Ремни для ног, размер 1, 2;
- 4.37 Подлокотник, размеры 1, 2, 3;
- 4.38 Подлокотник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.39 Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный, размер 1, 2;
- 4.40 Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной, размер 1, 2;
- 4.41 Опора для предплечья;
- 4.42 Покрытие опоры для предплечья;
- 4.43 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 4.44 Крепежи опоры для предплечья левый/правый;
- 4.45 Крепеж подлокотника складной;
- 4.46 Крепеж подлокотника фиксированный;
- 4.47 Крепеж подлокотника, левый/правый;
- 4.48 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.49 Столик откидной Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.50 Столик с усиленными крепежами Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.51 Крепеж столика, складной;
- 4.52 Крепеж столика усиленный, складной;
- 4.53 Запорное устройство для столика левое/правое;
- 4.54 Единая подножка Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 4.55 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 4.56 Откидная единая подножка Seabass Pro;
- 4.57 Раздельные подножки Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 4.58 Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 4.59 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.60 Откидные раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.61 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 4.62 Адаптер для подвижной подножки;
- 4.63 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 4.64 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 4.65 Пластиковая часть опоры бедра усиленная, правая и левая, размеры 1, 2;
- 4.66 Пластиковая часть опоры бедра, левая / правая, размеры 1, 2;
- 4.67 Покрытие опоры бедра Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;

- 4.68 Опора для стопы левая/правая, размер 1, 2;
- 4.69 Крепеж подножек;
- 4.70 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.71 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 4.72 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 4.73 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 4.74 Подушка сиденья Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 4.75 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 4.76 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 4.77 Пластина адаптера Sharky Pro;
- 4.78 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 4.79 Адаптер сиденья универсальный;
- 4.80 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 4.81 Капюшон;
- 4.82 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 4.83 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 4.84 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 4.85 Ручка для сопровождающего лица Seabass Pro;
- 4.86 Ручка М6х25;
- 4.87 Набор кронштейнов для транспортировки;
- 4.88 Ручка откидывания;
- 4.89 Петля для регулировки наклона сиденья, размеры 1, 2;
- 4.90 Передние колеса цельнолитные Seabass Pro, диаметр 15 см, 18 см;
- 4.91 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 4.92 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 4.93 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 4.94 Защита спиц, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 4.95 Брызговик, размер 1, 2, 3;
- 4.96 Ручка тормоза с красным стопорным механизмом;
- 4.97 Трос ручного тормоза, Seabass, Guppy;
- 4.98 Стояночные тормоза;
- 4.99 Крепление для стояночного тормоза для колес, размер 1, 2, 3;
- 4.100 Крепеж стояночного тормоза;
- 4.101 Профиль спинки, размер 1, 2;
- 4.102 Пластиковая часть спинки, размер 1, 2;
- 4.103 Подушка спинки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 4.104 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.105 Поддержка поясницы Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.106 Пластина, регулируемая по глубине, размер 1, 2;
- 4.107 Упор для сопровождающего лица Seabass Pro

IV. Кресла-коляски Anatomic Sits: модели Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro

Принадлежности:

1. К модели Anatomic Sits Flipper Pro:

- 1.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 1.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 1.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 1.4 Подголовник Pro Junior;
- 1.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 1.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 1.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 1.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 1.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 1.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 1.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 1.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 1.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 1.16 Крепление для подголовника;
- 1.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 1.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 1.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 1.26 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 1.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 1.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 1.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.33 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.34 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.35 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 1.36 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 1.37 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.38 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.39 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 1.40 Адаптер для подвижной подножки;
- 1.41 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;

- 1.42 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 1.43 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 1.44 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.45 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.46 Подушка сиденья Coolmax;
- 1.47 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 1.48 Адаптер сиденья универсальный;
- 1.49 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 1.50 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 1.51 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 1.52 Педаль (для регулировки высоты);
- 1.53 Вертикальная рама

2. К модели Anatomic Sits Flipper Pro Flex:

- 2.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 2.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 2.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 2.4 Подголовник Pro Junior; Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 2.5 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 2.6 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.7 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 2.8 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.9 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 2.10 Регулируемое крепление подголовника;
- 2.11 Активная повязка для лба Zitzi;
- 2.12 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 2.13 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 2.14 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 2.15 Крепление для подголовника;
- 2.16 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 2.17 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.18 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.19 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.20 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.21 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 2.22 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.23 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.24 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 2.25 Бедренный анитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.26 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 2.27 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 2.28 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.29 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;

- 2.30 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 2.31 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 2.32 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.33 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.34 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 2.35 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 2.36 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.37 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.38 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 2.39 Адаптер для подвижной подножки;
- 2.40 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 2.41 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 2.42 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 2.43 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.44 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.45 Подушка сиденья Coolmax;
- 2.46 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 2.47 Адаптер сиденья универсальный;
- 2.48 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 2.49 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 2.50 Ручка для сопровождающего лица 844230;
- 2.51 Ручка для сопровождающего лица 844012;
- 2.52 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 2.53 Педаль (для регулировки высоты);
- 2.54 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 2.55 Задние колеса цельнолитные Flipper Pro Flex, диаметр 30 см, 40 см;
- 2.56 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 2.57 Вертикальная рама

3. К модели Anatomic Sits Snapper:

- 3.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 3.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 3.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 3.4 Подголовник Pro Junior;
- 3.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 3.6 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 3.7 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 3.8 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.9 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 3.10 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.11 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 3.12 Регулируемое крепление подголовника;

- 3.13 Активная повязка для лба Zitzi;
- 3.14 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 3.15 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 3.16 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 3.17 Крепление для подголовника;
- 3.18 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 3.19 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.20 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.21 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.22 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.23 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 3.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 3.26 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 3.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 3.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 3.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 3.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 3.33 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.34 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.35 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 3.36 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 3.37 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.38 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.39 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 3.40 Адаптер для подвижной подножки;
- 3.41 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 3.42 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 3.43 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 3.44 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.45 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.46 Подушка сиденья Coolmax;
- 3.47 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 3.48 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 3.49 Адаптер сиденья универсальный;
- 3.50 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 3.51 Ручка для сопровождающего лица 844015;
- 3.52 Вертикальная рама

4. К модели Anatomic Sits Pengy:

4.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;

- 4.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 4.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 4.4 Подголовник Pro Junior;
- 4.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 4.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 4.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 4.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 4.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 4.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 4.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 4.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 4.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 4.16 Крепление для подголовника;
- 4.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 4.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 4.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 4.26 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 4.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 4.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 4.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 4.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 4.33 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.34 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.35 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 4.36 Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
- 4.37 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 4.38 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.39 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.40 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 4.41 Адаптер для подвижной подножки;
- 4.42 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 4.43 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 4.44 Опора для икр Pengy;
- 4.45 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 4.46 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;

- 4.47 Высокие бортики для отдельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.48 Подушка сиденья Coolmax;
- 4.49 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 4.50 Адаптер сиденья универсальный;
- 4.51 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 4.52 Передние колеса цельнолитные Pengy, диаметр 20 см, 30 см;
- 4.53 Передние колеса цельнолитные Guppy, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
- 4.54 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 4.55 Педаль тормоза Pengy, пластиковая;
- 4.56 Корзинка;
- 4.57 Вертикальная рама

5. К модели Anatomic Sits Guppy:

- 5.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 5.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 5.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 5.4 Подголовник Pro Junior;
- 5.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 5.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 5.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 5.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 5.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 5.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 5.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 5.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 5.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 5.16 Крепление для подголовника;
- 5.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 5.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 5.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 5.26 Бедренный анитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 5.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 5.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;

- 5.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 5.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 5.33 Подлокотник Guppy;
- 5.34 Крепеж подлокотника Guppy;
- 5.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.36 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 5.37 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 5.38 Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
- 5.39 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 5.40 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.41 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.42 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 5.43 Адаптер для подвижной подножки;
- 5.44 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 5.45 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 5.46 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 5.47 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.48 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.49 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 5.50 Адаптер сиденья универсальный;
- 5.51 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 5.52 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 5.53 Набор кронштейнов для транспортировки;
- 5.54 Ручка откидывания;
- 5.55 Передние колеса цельнолитные Guppy, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
- 5.56 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.57 Задние колеса пневматические, диаметр 30 см, 40 см;
- 5.58 Задние колеса пневматические Guppy, 40 см;
- 5.59 Задние колеса пневматические Guppy, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.60 Антипрокидыватель Guppy;
- 5.61 Защита спиц, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.62 Вилка переднего колеса;
- 5.63 Ось быстросъемного колеса, размер 1, 2;
- 5.64 Барабанный тормоз левый/правый, размер 1, 2;
- 5.65 Крепеж брызговиков, размер 1, 2, 3;
- 5.66 Ручка тормоза с красным стопорным механизмом;
- 5.67 Трос ручного тормоза, Seabass, Guppy;
- 5.68 Стояночные тормоза;
- 5.69 Крепление для стояночного тормоза для колес, размер 1, 2, 3;
- 5.70 Крепеж стояночного тормоза;
- 5.71 Зубчатая муфта;
- 5.72 Упор для сопровождающего лица Guppy;
- 5.73 Вертикальная рама

6.К модели Anatomic Sits Seabass Pro:

- 6.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 6.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 6.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 6.4 Подголовник Pro Junior;
- 6.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 6.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 6.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 6.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 6.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 6.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 6.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 6.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 6.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 6.16 Крепление для подголовника;
- 6.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 6.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 6.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 6.26 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 6.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 6.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.30 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 6.31 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 6.32 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 6.33 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 6.34 Подлокотник, размеры 1, 2, 3;
- 6.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.36 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 6.37 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.38 Единая подножка Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.39 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 6.40 Откидная единая подножка Seabass Pro;
- 6.41 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.42 Раздельные подножки Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.43 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.44 Откидные раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;

- 6.45 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.46 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 6.47 Адаптер для подвижной подножки;
- 6.48 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 6.49 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 6.50 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 6.51 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.52 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.53 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 6.54 Адаптер сиденья универсальный;
- 6.55 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 6.56 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 6.57 Ручка для сопровождающего лица Seabass Pro;
- 6.58 Набор кронштейнов для транспортировки;
- 6.59 Ручка откидывания;
- 6.60 Передние колеса цельнолитные Seabass Pro, диаметр 15 см, 18 см;
- 6.61 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 6.62 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 6.63 Задние колеса пневматические, диаметр 30 см, 40 см;
- 6.64 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 6.65 Защита спиц, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 6.66 Брызговик, размер 1, 2, 3;
- 6.67 Трос ручного тормоза, Seabass, Guppy;
- 6.68 Стояночные тормоза;
- 6.69 Крепление для стояночного тормоза для колес, размер 1, 2, 3;
- 6.70 Крепеж стояночного тормоза;
- 6.71 Упор для сопровождающего лица Seabass Pro;
- 6.72 Вертикальная рама

V. Кресла-коляски Anatomic Soft Sits: модели Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro

Принадлежности:

- 1. К модели Anatomic Soft Sits Flipper Pro:
 - 1.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
 - 1.2 Подголовник Pro Serie Adult;
 - 1.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
 - 1.4 Подголовник Pro Junior;
 - 1.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
 - 1.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
 - 1.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;

- 1.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 1.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 1.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 1.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 1.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 1.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 1.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 1.16 Крепление для подголовника;
- 1.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 1.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 1.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 1.26 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 1.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 1.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 1.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 1.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.33 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.34 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.35 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 1.36 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 1.37 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.38 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.39 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 1.40 Адаптер для подвижной подножки;
- 1.41 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 1.42 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 1.43 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 1.44 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.45 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.46 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 1.47 Адаптер сиденья универсальный;
- 1.48 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 1.49 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 1.50 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 1.51 Педаль (для регулировки высоты);
- 1.52 Вертикальная рама

2. К модели Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex:

- 2.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 2.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 2.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 2.4 Подголовник Pro Junior;
- 2.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 2.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 2.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 2.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 2.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 2.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 2.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 2.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 2.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 2.16 Крепление для подголовника;
- 2.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 2.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 2.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 2.26 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 2.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 2.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 2.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 2.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 2.33 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.34 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.35 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 2.36 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 2.37 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.38 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.39 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 2.40 Адаптер для подвижной подножки;
- 2.41 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 2.42 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;

- 2.43 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 2.44 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.45 Высокие бортики для отдельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.46 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 2.47 Адаптер сиденья универсальный;
- 2.48 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 2.49 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 2.50 Ручка для сопровождающего лица 844230;
- 2.51 Ручка для сопровождающего лица 844012;
- 2.52 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 2.53 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 2.54 Задние колеса цельнолитные Flipper Pro Flex, диаметр 30 см, 40 см;
- 2.55 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 2.56 Вертикальная рама

3. К модели Anatomic Soft Sits Snapper:

- 3.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 3.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 3.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 3.4 Подголовник Pro Junior;
- 3.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 3.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 3.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 3.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 3.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 3.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 3.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 3.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 3.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 3.16 Крепление для подголовника;
- 3.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 3.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 3.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 3.26 Бедренный анитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;

- 3.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 3.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 3.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 3.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 3.33 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.34 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.35 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 3.36 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 3.37 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.38 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.39 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 3.40 Адаптер для подвижной подножки;
- 3.41 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 3.42 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 3.43 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 3.44 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.45 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.46 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 3.47 Адаптер сиденья универсальный;
- 3.48 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 3.49 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 3.50 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 3.51 Педаль (для регулировки высоты);
- 3.52 Вертикальная рама

4 К модели Anatomic Soft Sits Pengy:

- 4.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 4.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 4.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 4.4 Подголовник Pro Junior;
- 4.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 4.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 4.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 4.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 4.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 4.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 4.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 4.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 4.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 4.16 Крепление для подголовника;

- 4.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 4.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 4.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 4.26 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 4.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 4.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 4.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 4.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 4.33 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.34 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.35 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 4.36 Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
- 4.37 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 4.38 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.39 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.40 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 4.41 Адаптер для подвижной подножки;
- 4.42 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 4.43 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 4.44 Опора для икр Pengy;
- 4.45 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 4.46 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.47 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.48 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 4.49 Адаптер сиденья универсальный;
- 4.50 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 4.51 Передние колеса цельнолитные Pengy, диаметр 20 см, 30 см;
- 4.52 Передние колеса цельнолитные Guppy, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
- 4.53 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 4.54 Педаль тормоза Pengy, пластиковая;
- 4.55 Корзинка;
- 4.56 Вертикальная рама

5 К модели Anatomic Soft Sits Guppy:

- 5.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 5.2 Подголовник Pro Serie Adult;

- 5.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 5.4 Подголовник Pro Junior;
- 5.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 5.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 5.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 5.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 5.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 5.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 5.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 5.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 5.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 5.16 Крепление для подголовника;
- 5.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 5.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 5.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 5.26 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 5.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 5.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 5.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 5.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 5.33 Подлокотник Guppy;
- 5.34 Крепеж подлокотника Guppy;
- 5.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.36 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 5.37 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 5.38 Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
- 5.39 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 5.40 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.41 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.42 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 5.43 Адаптер для подвижной подножки;
- 5.44 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 5.45 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 5.46 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 5.47 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;

- 5.48 Высокие бортики для отдельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.49 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 5.50 Адаптер сиденья универсальный;
- 5.51 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 5.52 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 5.53 Набор кронштейнов для транспортировки;
- 5.54 Ручка откидывания;
- 5.55 Передние колеса цельнолитные Guppy, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
- 5.56 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.57 Задние колеса пневматические, диаметр 30 см, 40 см;
- 5.58 Задние колеса пневматические Guppy, 40 см;
- 5.59 Задние колеса пневматические Guppy, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.60 Антипрокидыватель Guppy;
- 5.61 Защита спиц, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.62 Вилка переднего колеса;
- 5.63 Ось быстросъемного колеса, размер 1, 2;
- 5.64 Барабанный тормоз левый/правый, размер 1, 2;
- 5.65 Крепеж брызговиков, размер 1, 2, 3;
- 5.66 Ручка тормоза с красным стопорным механизмом;
- 5.67 Трос ручного тормоза, Seabass, Guppy;
- 5.68 Стояночные тормоза;
- 5.69 Крепление для стояночного тормоза для колес, размер 1, 2, 3;
- 5.70 Крепеж стояночного тормоза;
- 5.71 Зубчатая муфта;
- 5.72 Упор для сопровождающего лица Guppy;
- 5.73 Вертикальная рама

6 К модели Anatomic Soft Sits Seabass Pro:

- 6.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 6.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 6.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 6.4 Подголовник Pro Junior;
- 6.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 6.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 6.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 6.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 6.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 6.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 6.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 6.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 6.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;

- 6.16 Крепление для подголовника;
- 6.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 6.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 6.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 6.26 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 6.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 6.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.30 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 6.31 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 6.32 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 6.33 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 6.34 Подлокотник, размеры 1, 2, 3;
- 6.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.36 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 6.37 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.38 Единая подножка Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.39 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 6.40 Откидная единая подножка Seabass Pro;
- 6.41 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.42 Раздельные подножки Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.43 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.44 Откидные раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.45 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.46 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 6.47 Адаптер для подвижной подножки;
- 6.48 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 6.49 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 6.50 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 6.51 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.52 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.53 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 6.54 Адаптер сиденья универсальный;
- 6.55 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 6.56 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 6.57 Ручка для сопровождающего лица Seabass Pro;
- 6.58 Набор кронштейнов для транспортировки;
- 6.59 Ручка откидывания;
- 6.60 Передние колеса цельнолитные Seabass Pro, диаметр 15 см, 18 см;

- 6.61 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 6.62 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 6.63 Задние колеса пневматические, диаметр 30 см, 40 см;
- 6.64 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 6.65 Защита спиц, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 6.66 Брызговик, размер 1, 2, 3;
- 6.67 Ручка тормоза с красным стопорным механизмом;
- 6.68 Трос ручного тормоза, Seabass, Guppy;
- 6.69 Стояночные тормоза;
- 6.70 Крепление для стояночного тормоза для колес, размер 1, 2, 3;
- 6.71 Крепеж стояночного тормоза;
- 6.72 Упор для сопровождающего лица Seabass Pro;
- 6.73 Вертикальная рама

VI Кресло-коляска Carseat Pro.

Принадлежности:

- 1. Подголовник Carseat Pro;
- 2. Подголовник Carseat Pro удлиненный;
- 3. Активная повязка для лба Zitzi;
- 4. Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 5. Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 6. Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 7. Нижний крепежный кронштейн;
- 8. Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 9. Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 10. Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 11. Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 12. Поддержка таза, размер 1, 2;
- 13. Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 14. Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 15. Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 16. Столик Carseat Pro;
- 17. Подножка Carseat Pro;
- 18. Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
- 19. Опора для икр Pengy;
- 20. Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 21. Покрывало опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 22. Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 23. Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 24. Адаптер сиденья Carseat Pro;
- 25. Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 26. Передние колеса цельнолитные Pengy, диаметр 20 см, 30 см;

- 27. Передние колеса цельнолитные Gupru, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
- 28. Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 29. Педаль тормоза Pengu, пластиковая;
- 30. Клин;
- 31. Подушка спинки Carseat Pro, размер 2, 3;
- 32. Подушка спинки из Алькантары Carseat Pro, размер 2, 3;
- 33. Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro;
- 34. Корзинка

We hereby certify the
personal signature of

163 p.

Bo Evt L



[Перевод с английского и шведского языков на русский язык]

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор Бо Эрикссон
/подпись/

[Штамп:
Настоящим подтверждаем
личную подпись]

[Печать:
Публичный нотариус г. Нёрркёпинг
27.09.2016]
/подпись/

Текст документа на русском языке

На обороте документа:

[Штамп:
Настоящим подтверждаем
личную подпись]

[Печать:
Публичный нотариус г. Нёрркёпинг
27.09.2016]
/подпись/

Перевод выполнен дипломированным переводчиком Фроловой Мариной Михайловной

Город Москва.

Четырнадцатого октября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимова Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Фроловой Мариной Михайловной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 12-34723

Взыскано по тарифу: 100 руб.

ВРИО нотариуса



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 164 лист(-а, -ов).

ВРИО нотариуса

«УТВЕРЖДАЮ»

« I certify»

Анатомик СИТТ АБ

Anatomic SITТ AB

Генеральный директор Бо Эрикссон

General Director Bo Eriksson

«  » 2016

We hereby certify the
personal signature of



Руководство по эксплуатации медицинского изделия
КРЕСЛА-КОЛЯСКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ANATOMIC SITТ,
В ИСПОЛНЕНИЯХ, С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

Редакция 2

2016

«УТВЕРЖДАЮ»

« I certify»

Анатомик СИТТ АБ

Anatomic SITT AB

Генеральный директор Бо Эрикссон

General Director Bo Eriksson

« Bo Eriksson » 2016

We hereby certify the
personal signature of



STEN LADEBRANDT

Руководство по эксплуатации медицинского изделия
КРЕСЛА-КОЛЯСКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ANATOMIC SITT,
В ИСПОЛНЕНИЯХ, С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

Редакция 2

2016

Производитель:

Anatomic SITТ АВ (Анатомик СИТТ АВ), Швеция

Юридический адрес: Box 6137, 600 06, Norrköping, Sweden (Бокс 6137, 600 06, Норркёпинг, Швеция).

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника»

ООО «Ортоника», юридический адрес: 105554, г. Москва, ул. Парковая 11-я, д. 9/35, кв. 94

Телефон: +7 (495) 641-71-77

Содержание:

1. Наименование, назначение, состав и принципы функционирования МИ
2. Показания и противопоказания
3. Технические характеристики
4. Применяемые материалы
5. Эксплуатация
6. Способы очистки и дезинфекции МИ
7. Упаковка и маркировка
8. Условия хранения и транспортировки
9. Утилизация медицинского изделия
10. Техническое обслуживание
11. Гарантийные обязательства
12. Рекламация

1. Наименование, назначение, состав и принципы функционирования МИ.

Кресла-коляски Anatomic SITT предназначены для передвижения инвалида или человека, не способного самостоятельно ходить и имеющего трудности с поддержанием правильного положения тела. Кресла-коляски передвигаются вручную сопровождающим лицом с помощью ручек изделия. Предусмотрены различные варианты исполнения, предназначенные для пациентов разных возрастных категорий (детей или взрослых). Каждый вариант исполнения имеет свой модельный ряд. Ниже приводится перечень вариантов исполнения и моделей кресел-колясок Anatomic SITT.

Варианты исполнения:

1. **Кресла-коляски Zitzi Delfi Pro:** модели Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro
2. **Кресла-коляски Zitzi Pengy:** модели Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy.
3. **Кресла-коляски Zitzi Sharky Pro:** модели Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro.
4. **Кресла-коляски Anatomic Sits:** модели Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro.
5. **Кресла-коляски Anatomic Soft Sits:** модели Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro.
6. **Кресло-коляска Carseat Pro.**

Каждая модель кресла-коляски имеет отдельный набор принадлежностей, из общего списка принадлежностей. Общий список и описание всех принадлежностей к МИ приводится ниже. Варианты исполнения и модели кресла коляски Anatomic SITT с перечнем принадлежностей для каждой модели представлены в Приложении.

Кресла-коляски Anatomic SITT являются механическими. Все модели кресел-колясок управляются с помощью сопровождающего лица.

Каждая модель кресла-коляски Anatomic SITT состоит из двух основных компонентов: сиденья и рамы. Существуют несколько моделей сидений Anatomic SITT, и несколько моделей рам Anatomic SITT. Для сиденья каждого вида предусмотрена

возможность комплектации с несколькими различными видами рам, в зависимости от целевого назначения кресла-коляски и потребностей пациента.

Ниже описаны варианты исполнения и модели кресел-колясок Anatomic SITT. Кресла-коляски в определенном варианте исполнения сконструированы на основе одной определенной модели сиденья Anatomic SITT. Все модели в определенном исполнении представляют собой комбинацию данного вида кресла и определенного вида рамы.

Кресла-коляски Anatomic SITT являются складными, за исключением моделей, оснащенных рамами Pengy. Складными являются следующие пять моделей:

- Zitzi Delfi Pro Pengy;
- Zitzi Pengy Pengy;
- Anatomic Sits Pengy;
- Anatomic Soft Sits Pengy;
- Carseat Pro.

Остальные модели кресел-колясок Anatomic SITT являются складными.

1. Кресла-коляски Zitzi Delfi Pro включают в себя модели **Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro.**

Кресла-коляски Zitzi Delfi Pro предназначены для детей и подростков.

Данные кресла-коляски сконструированы на основе сиденья Zitzi Delfi Pro. Описанные ниже модели представляют собой комбинацию сиденья Zitzi Delfi Pro и различных видов рам.

Кресла-коляски данной серии являются складными, за исключением модели Zitzi Delfi Pro Pengy (складная модель, описание приводится ниже).

Все кресла-коляски в данном варианте исполнения имеют характеристики сиденья (кресла), приведенные ниже.

Кресло Zitzi Delfi Pro предназначено для детей и подростков с нарушением двигательной активности и имеющих трудности с поддержанием правильного положения тела. Кресло изготовлено на основе регулируемых систем соединений. Модель предусматривает комплексные настройки сиденья и спинки.

Сиденье имеет анатомическую форму, обеспечивает естественное положение таза и препятствует сползанию. Предусмотрена возможность регулировать глубину сиденья, изменять параметры аддукции и абдукции. Высота сиденья может регулироваться у моделей Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass.

Параметры сиденья возможно изменять по мере роста ребенка, адаптируя его под текущие потребности.

Спинка также является регулируемой – предусмотрена возможность регулировки ее угла наклона, с помощью газовой пружины. Эта функция способствует смягчению проявлений мышечной спастичности, позволяет корректировать или компенсировать нарушения, обеспечивая оптимальное положение при сидении. В спинку встроен пружинный амортизатор, который также смягчает негативные последствия повышенного тонуса мышц.

Трёхсторонняя боковая поддержка контролирует осанку, уменьшает проявление нарушений, обеспечивает комфорт.

Кресло оснащено регулируемыми опорами для ног.

Модель Zitzi Delfi Pro Flipper Pro



Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Delfi Pro.

Модель нескладная, предназначается для использования внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. (Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Функция «регулировка угла наклона сиденья» является отличительной особенностью рамы, данная функция позволяет не нарушать баланс и стабильность положения пользователя. Таким образом, центр тяжести не смещается. Также предусмотрена регулировка высоты сиденья. Изменение данных параметров

сиденья осуществляется с помощью газовой пружины.

Предусмотрена возможность регулировать угол наклона спинки с помощью газовой пружины.

Предусмотрены размеры 0, 1, 2, 3, 4 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex

Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Delfi Pro.

Модель нескладная. Предназначается для использования как внутри помещений, так и на улице.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. (Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).



Регулировка угла наклона и высоты сиденья осуществляется при помощи газовой пружины.

Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.

Отличительной особенностью модели является возможность оснащения колесами большего диаметра, 30 см или 40 см (в чем заключается принципиальное отличие от предыдущей модели с рамой Flipper Pro. Подробные характеристики изложены в пункте «Технические характеристики» ниже).

Предусмотрены размеры 0, 1, 2, 3, 4 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Ziti Delfi Pro Snapper



Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Ziti Delfi.

Модель складная. Конструкция рамы предполагает использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. (Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.

Отличительные особенности – компактность рамы, ориентированность на домашнее использование, возможность регулировки угла наклона и высоты сиденья (с помощью газовой пружины).

Предусмотрены размеры 0, 1, 2, 3, 4 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Zitzi Delfi Pro Pengy



Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Delfi Pro.

Конструкция рамы предполагает преимущественное использование на улицах, хотя использование внутри помещений также возможно.


Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, абдукция – аддукция. (Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.

Отличительные особенности рамы:

- наличие встроенной динамической системы подвески, которая обеспечивает плавное передвижение по неровным поверхностям;
- возможность оснащения колесами повышенной проходимости, что делает возможным использование модели не только на твердом, асфальтовом, покрытии, но и на дорогах худшего качества;
- модель складная. Схема складывания следующая: кресло снимается (оно не является складным), рама складывается путем простых манипуляций и надежно фиксируется в сложенном виде.

На рисунке ниже представлена схема складывания рамы Pengy.

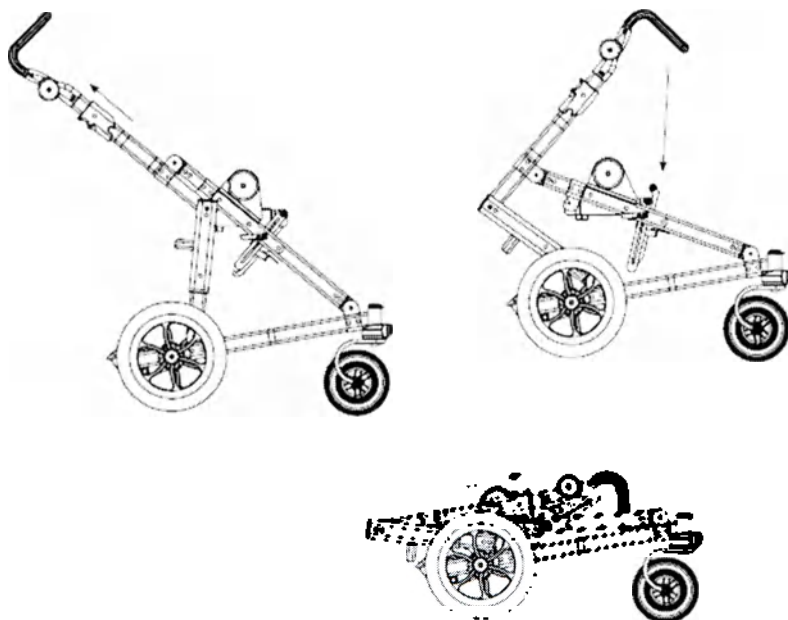

Более подробная инструкция приводится в руководстве по эксплуатации изделия.

Предусмотрены размеры 0, 1, 2 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Zitzi Delfi Pro Guppy



Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Delfi Pro.

Модель складная. Преимущественное назначение – для использования на улице, хотя возможно также использование внутри помещений. Рама может быть оснащена колесами различных размеров и типов, что позволяет удовлетворять различные требования.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Основная отличительная особенность – сбалансированность конструкции, высокая устойчивость рамы.

Предусмотрены размеры 0, 1, 2, 3, 4 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Список принадлежностей к данной модели кресла-коляски Anatomic SITT приводится в Приложении. Описание принадлежностей приводится в данном разделе ниже в пункте «Принадлежности».

Модель Zitzi Delfi Pro Seabass Pro

Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Delfi Pro.

Модель складная. Преимущественное назначение модели – для использования на улице, хотя возможно также и использование внутри помещений. Обладает максимальной грузоподъемностью из моделей данной серии (до 90 кг).



Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Предусмотрены размеры 3, 4 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

2. Кресла-коляски Zitzi Pengy включают в себя следующие модели: **Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy.**

Предназначены для детей и подростков, имеющих нарушение двигательной активности и трудности с сохранением правильного положения тела.

Данные кресла-коляски сконструированы на основе сиденья Zitzi Pengy. Описанные ниже модели представляют собой комбинацию сиденья Zitzi Pengy и различных видов рам. Для всех кресел данного варианта исполнения имеются следующие характеристики сиденья.

Сиденье Zitzi Pengy является аналогом сиденья Zitzi Delfi Pro, специально адаптированным для установки на раму Zitzi Pengy. Имеет те же функции, что и Delfi Pro.

Модель Zitzi Pengy Flipper Pro



Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Pengy.

Модель складная. Предназначается для использования внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона и высоты сиденья реализуется с помощью газовой пружины.

Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности – ориентированность на домашнее использование, возможность регулировки

угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте; возможность приводить раму в самое низкое положение к полу, что позволяет повысить активность пользователя.

Предусмотрен единственный размер (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Zitzi Pengy Flipper Pro Flex



Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Delfi.

Модель нескладная. Предназначается для использования как внутри помещений, так и на улице.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона и высоты сиденья реализуется с помощью газовой пружины.

Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности – возможность оснащения колесами большего диаметра, 30см или 40 см (что делает модель подходящей для уличного использования), возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.

Предусмотрен единственный размер (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Zitzi Pengy Snapper

Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzy Pengy.

Модель нескладная. Конструкция рамы предполагает использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона и высоты сиденья реализуется с помощью газовой пружины.

Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).



Отличительные особенности - компактность рамы, ориентированность на домашнее использование, возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.

Предусмотрен единственный размер (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Zitzi Pengy Pengy



Предназначается для детей и подростков. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Pengy.

Конструкция рамы предполагает преимущественное использование на улицах, хотя использование внутри помещений также возможно.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: глубина, угол наклона, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона сиденья реализуется с помощью газовой пружины.

Угол наклона спинки также регулируется с помощью газовой пружины.

Отличительные особенности модели:

- Рама имеет встроенную динамическую систему подвески, которая обеспечивает плавное передвижение по неровным поверхностям.

- Рама может быть оснащена колесами повышенной проходимости, что делает возможным использование модели не только на твердом, асфальтовом, покрытии, но и на дорогах худшего качества.

- Модель складная. Кресло снимается (оно не является складным), рама складывается путем простых манипуляций и надежно фиксируется в сложенном виде. Иллюстрация схемы складывания приводится в описании модели Zitzi Delfi Pro Pengy выше.

Предусмотрен единственный размер (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

3. Кресла-коляски Zitzi Sharky Pro включают в себя следующие модели: **Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro.**

Предназначены для подростков и взрослых, имеющих нарушение двигательной активности и трудности с сохранением правильного положения тела.

Данные кресла-коляски сконструированы на основе сиденья Zitzi Sharky Pro. Описанные ниже модели представляют собой комбинацию сиденья Zitzi Sharky Pro и различных видов рам.

Модель Zitzi Sharky Pro является аналогом модели Zitzi Delfi Pro, но предназначена для взрослых пользователей.

Кресло оснащено гибкой системой регулировки сиденья и спинки. Сиденье имеет анатомическую форму, что обеспечивает естественное положение таза. Глубина сиденья, аддукция и абдукция регулируются плавно и точно. Глубина сиденья регулируется в соответствии с длиной бедренной части ноги. Предусмотрена регулировка спинки: угла наклона, с помощью газовой пружины. Конструкция спинки позволяет контролировать патологические движения и смягчает последствия повышенного мышечного тонуса. Трехсторонняя боковая поддержка обеспечивает контроль осанки, уменьшает проявление нарушений, позволяет корректировать или компенсировать деформации и поддерживать оптимальное положение тела при сидении.

Кресло оснащено регулируемыми опорами для ног. Позволяет компенсировать разницу в длине ног до 10 см.

Zitzi Sharky Pro Flipper Pro


Предназначается для подростков и взрослых. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Sharky Pro.

Модель складная. Предназначается для использования внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция.

Функция «регулировка угла наклона сиденья» позволяет не нарушать баланс и стабильность положения пользователя. Таким образом, центр тяжести не смещается. Регулировка угла наклона сиденья осуществляется с помощью газовой пружины. Также предусмотрена регулировка высоты сиденья с помощью газовой пружины.

Предусмотрена возможность регулировать угол наклона спинки, также с помощью газовой пружины.

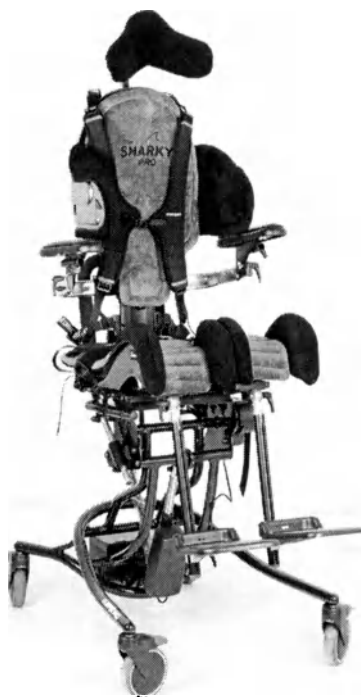

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности – ориентированность на взрослых пользователей, ориентированность на домашнее использование, возможность регулировки угла наклона

кресла и регулировки сиденья по высоте; возможность приводить раму в самое низкое положение к полу, что позволяет повысить активность пользователя.

Предусмотрены размеры 1, 2 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex



Предназначается для подростков и взрослых. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Sharky Pro.

Модель нескладная. Предназначается для использования внутри как внутри помещений, так и на улице.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона и высоты сиденья реализуется с помощью газовой пружины.

Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности – ориентированность на взрослых пользователей, возможность оснащения колесами большего диаметра, 30см или 40 см (что делает модель подходящей для уличного использования), возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.

Предусмотрены размеры 1, 2 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Zitzi Sharky Pro Snapper



Предназначается для подростков и взрослых. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Sharky Pro.

Модель нескладная. Конструкция рамы предполагает использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона и высоты сиденья реализуется с помощью газовой пружины.

Угол наклона спинки регулируется с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности - ориентированность на взрослых пользователей, компактность рамы, ориентированность на домашнее использование, возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.

Предусмотрены размеры 1, 2 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Zitzi Sharky Pro Seabass Pro



Предназначается для подростков и взрослых. Обладает всеми особенностями, перечисленными ранее в описании сиденья Zitzi Sharky Pro.

Модель нескладная. Преимущественное назначение – для использования на улице, хотя возможно также и использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

обладает максимальной грузоподъемностью из моделей данной серии (до 135 кг).

Отличительные особенности: ориентированность на взрослых пользователей, ориентированность на использование на улице;

Предусмотрены размеры 1, 2 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

4. Кресла-коляски Anatomic Sits включают в себя модели Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro.

Предназначены для детей, подростков и взрослых, имеющих нарушение двигательной активности и трудности с сохранением правильного положения тела.

Данные кресла-коляски сконструированы на основе сиденья Anatomic Sits. Описанные ниже модели представляют собой комбинацию сиденья Anatomic Sits и различных видов рам.

Сиденья Anatomic Sits - это кресла, предназначенные главным образом для пользователей с тяжелой степенью двигательных нарушений, повышенным мышечным тонусом. Конструктивные особенности (в частности, форма сиденья, соответствующая контурам тела) позволяют снизить нагрузку на пользователя, обеспечить необходимую поддержку и стабильность положения тела, поддержать симметрию позы.

Модель Anatomic Sits Flipper Pro



Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Sits, описанными ранее.

Модель складная. Предназначается для использования внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона и высота сиденья регулируется с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, ориентированность на домашнее использование, анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя, возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте; возможность приводить раму в самое низкое положение к полу, что позволяет повысить активность пользователя.

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Sits Flipper Pro Flex



Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Sits, описанными ранее.

Модель нескладная.
Предназначается для использования как внутри помещений, так и на улице.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона и высота сиденья регулируются с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя, возможность оснащения колесами большего диаметра, 30см или 40 см (что делает модель подходящей для уличного использования), возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Список принадлежностей к данной модели кресла-коляски Anatomic SITT приводится в Приложении. Описание принадлежностей приводится в данном разделе ниже в пункте «Принадлежности».

Модель Anatomic Sits Snapper

Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Sits, описанными ранее.

Модель нескладная. Конструкция рамы предполагает использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона и высота сиденья регулируются с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).



Отличительные особенности:
ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сидения, соответствующая контурам тела пользователя, компактность рамы, ориентированность на домашнее использование, возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Sits Pengy



Предназначены для детей и подростков. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Sits, описанными ранее.

Конструкция рамы предполагает преимущественное использование на улице, хотя возможно и использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона сиденья реализуется с помощью газовой пружины.

Угол наклона спинки также регулируется с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности модели:

- Ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей,
- Анатомическая форма сидения, соответствующая контурам тела пользователя.
- Рама имеет встроенную динамическую систему подвески, которая обеспечивает плавное передвижение по неровным поверхностям.
- Рама может быть оснащена колесами повышенной проходимости, что делает возможным использование модели не только на твердом, асфальтовом, покрытии, но и на дорогах худшего качества.
- Модель складная. Кресло снимается (оно не является складным), рама складывается путем простых манипуляций и надежно фиксируется в сложенном виде.

Иллюстрация схемы складывания приводится в описании модели Zitzi Delfi Pro Pengy выше.

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Sits Guppy

Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Sits, описанными ранее.

Модель нескладная. Преимущественное назначение – для использования на улице, хотя возможно также использование внутри помещений. Рама может быть оснащена колесами различных размеров и типов, что позволяет удовлетворять различные требования.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона сиденья регулируется с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).



Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя, сбалансированность конструкции, высокая устойчивость рамы.

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Sits Seabass Pro

Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Sits, описанными ранее.

Модель нескладная. Преимущественное назначение – для использования на улице, хотя возможно также и использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона сиденья регулируется с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.



(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя, ориентированность на использование на улице; обладает максимальной грузоподъемностью из моделей данной серии (до 135 кг). Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

5. Кресла-коляски Anatomic Soft Sits включают в себя модели Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro.

Предназначены для детей, подростков и взрослых, имеющих нарушение двигательной активности и трудности с сохранением правильного положения тела.

Данные кресла-коляски сконструированы на основе сиденья Anatomic Soft Sits. Это мягкое анатомическое сиденье, отличительной особенностью которого является наличие пенистого наполнителя, что позволяет эффективно снижать давление на тело пользователя. Описанные ниже модели представляют собой комбинацию сиденья Anatomic Soft Sits и различных видов рам.

Модель Anatomic Soft Sits Flipper Pro



Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Soft Sits, описанными ранее.

Модель складная. Предназначается для использования внутри помещений. Модель складная. Предназначается для использования внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона и высота сиденья регулируются с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, ориентированность на домашнее использование, анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя, наличие в покрытии сиденья наполнителя, позволяющего снижать давление; возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте; возможность приводить раму в самое низкое положение к полу, что позволяет повысить активность пользователя.

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex

Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Soft Sits, описанными ранее.

Модель складная. Предназначается для использования как внутри помещений, так и на улице.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона и высота сиденья регулируются с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя, наличие в покрытии сиденья наполнителя, позволяющего снижать давление; возможность оснащения колесами большего диаметра, 30см или 40 см (что делает модель подходящей для уличного использования), возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.



Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Soft Sits Snapper

Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Soft Sits, описанными ранее.

Модель складная. Конструкция рамы предполагает использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона и высота сиденья регулируются с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).



Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя, наличие в покрытии сиденья наполнителя, позволяющего снижать давление; компактность рамы, ориентированность на домашнее использование, возможность регулировки угла наклона кресла и регулировки сиденья по высоте.

Предусмотрены размеры 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Soft Sits Pengy

Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Soft Sits, описанными ранее.

Конструкция рамы предполагает использование как внутри помещений, так и на улицах с твердым дорожным покрытием.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, абдукция – аддукция. Регулировка угла наклона сиденья реализуется с помощью газовой пружины.

Угол наклона спинки также регулируется с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).



Отличительные особенности модели:

- Ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей.
- Анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя.
- Наличие в покрытии сиденья наполнителя, позволяющего снижать давление.
- Рама имеет встроенную динамическую систему подвески, которая обеспечивает плавное передвижение по неровным поверхностям.
- Рама может быть оснащена колесами повышенной проходимости, что делает возможным использование модели не только на твердом, асфальтовом, покрытии, но и на дорогах худшего качества.
- Модель складная. Кресло снимается (оно не является складным), рама складывается путем простых манипуляций и надежно фиксируется в сложенном виде. Иллюстрация схемы складывания приводится в описании модели Zitzu Delfi Pro Pengy выше.

Предусмотрены размеры 1, 2 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Модель Anatomic Soft Sits Guppy

Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Soft Sits, описанными ранее.

Модель нескладная.

Преимущественное назначение – для использования на улице, хотя возможно также использование внутри помещений. Рама может быть оснащена колесами различных размеров и типов, что позволяет удовлетворять различные требования.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона сиденья регулируется с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сиденья, соответствующая контурам тела пользователя, наличие в покрытии сиденья наполнителя, позволяющего снижать давление; сбалансированность конструкции, высокая устойчивость рамы.

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).



Модель Anatomic Soft Sits Seabass Pro

Предназначены для детей, подростков и взрослых. Обладают всеми характеристиками сидений Anatomic Soft Sits, описанными ранее.

Модель нескладная. Преимущественное назначение – для использования на улице, хотя возможно также и использование внутри помещений.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: ширина, глубина, угол наклона, высота, абдукция – аддукция. Угол наклона сиденья регулируется с помощью газовой пружины.

Предусмотрены возможности регулировки параметров спинки: угол наклона, с помощью газовой пружины.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).



Отличительные особенности: ориентированность как на детей, так и на взрослых пользователей, анатомическая форма сидения, соответствующая контурам тела пользователя, наличие в покрытии сиденья наполнителя, позволяющего снижать давление; ориентированность на использование на улице; обладает максимальной грузоподъемностью из моделей данной серии (до 135 кг).

Предусмотрены размеры 1, 2, 3 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

6. Кресло-коляска Carseat Pro



Предназначается для детей и подростков, имеющих нарушение двигательной активности и трудности с сохранением правильного положения тела.

Модель складная. Оснащена рамой Pengy. Конструкция рамы предполагает использование как внутри помещений, так и на улицах с твердым дорожным покрытием.

Предусмотрены возможности регулировки следующих параметров сиденья: глубина, угол наклона, абдукция – аддукция.

Угол наклона спинки не регулируется.

(Значения приводятся в разделе «Технические характеристики»).

Отличительные особенности модели:

- ориентированность на детей;
- является удобной для транспортировки на автомобиле, т.к. является складной.

Кресло снимается (оно не является складным), рама складывается путем простых манипуляций и надежно фиксируется в сложенном виде. Иллюстрация схемы складывания приводится в описании модели Zitzi Delfi Pro Pengy выше

Предусмотрены размеры 1, 2 (параметры приводятся в таблицах в пункте «Технические характеристики» ниже).

Все варианты исполнения МИ «Кресла – коляски Anatomic SITT» имеют принадлежности. Наборы принадлежностей для каждой модели различаются по составу. Общий перечень принадлежностей с их описанием представлен ниже.

Принадлежности

Название	Описание, назначение	Размеры (не более) Масса (не более)	Модели кресел-колясок , с кот. Комплектуется	Фото
Боковая поддержка – это деталь, крепящаяся к спинке кресла, предназначена для фиксирования тела пациента по бокам. Включает: комплект крепежа, подушку, регулируется по ширине и высоте				
1. Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro	Крепится к спинке, поддерживая пациента, и находится в фиксированном положении	Д x Ш x В, масса Размер 1: 12,5 x 8.5 x 17-26 см, 1.2 кг Размер 2, 15x 9.5 x 19-28 см, 1.5, кг Размер 3: 17,5 x 11x 22-31 см, 1.8 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro (для размера 3 также Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro)	
2. Боковая поддержка фиксированная Zitzi Sharky Pro		Д x В , масса Размер 1: 27-35 x 21 см Размер 2: 30-38 x 25 см	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
3. Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro	Крепится к спинке, поддерживая пациента. Может откидываться в сторону, чтобы облегчить выход из коляски	Д x В, масса Размер 1, 17-26 см/12,5 см, 1.2 кг Размер 2, 19-28 см/15 см, 1.5, кг Размер 3, 22-31 см/17,5 см, 1.8 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	

4. Боковая поддержка откидная Zitzi Sharky Pro		Д х В, масса Размер 1 - 27-35 см/21 см, 2 кг Размер 2, 30-38 см/ 25 см, 2.1 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
5. Усиленная основа боковой поддержки Zitzi Sharky Pro	Усиленный крепёж для боковой поддержки	Д х Ш х В, масса Размер 1: 12 x 5 x 12 см, 150 г Размер 2: 12, 5 x 8 x 19 см, 200 г	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
6. Крепеж боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, складной	Крепёж для боковой поддержки, который может откидываться, облегчая выход из коляски.	Д х Ш х В, масса 10 x 5 x 10 см, 150 г	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
Подголовник – это деталь, крепящаяся к верху спинки коляски, предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение пользователя. Включает: 1) пластина подголовника, 2) подушка, 3) опора, 4) держатель				
7. Подголовник Pengy	Предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка/	Д х В, масса Размер 1: 22 x 15 см, 200 г Размер 2: 24 x 19 см, 210 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	
8. Подголовник Zitzi Sharky Pro Standard	Предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка.	Д х В, масса Размер 1 удлиненный: 28x16 см, 220 г Размер 2: 24x19 см, 200 г Размер 2 удлиненный: 28x21 см, 230 г	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
9. Подголовник Pengy удлиненный	Предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка. Имеет более вытянутую в длину форму	Д х В, масса Размер 1: 25 x 16 см, 220 г Размер 2: 27 x 21 см, 230 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	

10. Подголовник Pro Standard	Предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка. Цвета: серый, синий, красный, черный	Д х В, масса Размер 1: 22 x 15 см, 1 кг Размер 2: 24 x 19 см, 1.2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
11. Подголовник Pro Standard удлинненный,		Д х В, масса Размер 1: 28 x 16 см, 1.4 кг Размер 2: 28 x 21 см, 1.5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
12. Подголовник Pro Mini	Предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка. Все подголовники Pro Serie должны быть укомплектованы основной-адаптером и держателем подголовника	Д х В, масса Размер 1: 22 x 14 см, 1.2 кг Размер 2: 25,5 x 16 см, 1.3 кг Размер 3: 33 x 19 см 1.4 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
13. Подголовник Pro Serie Adult		В х Д, масса 24 x 37 см, 1.5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
14. Подголовник Pro Serie Adult		В х Д, масса 26 x 32 см, 1.4 кг	Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	


15. Подголовник Pro Junior		В х Д, масса 27 х 35 см, 1.2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
16. Подголовник Pro Junior Anatomic sits		В х Д, масса 29 х 37 см, 1.4 кг	Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
17. Подголовник Pro Single adult, junior		В х Д, масса Взрослый размер: 30 х 37 см, 1.3 кг Детский размер: 24 37 см, 1.2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
18. Подголовник Pro Plush		Длина, масса Размер 1: длина 20 см, 1.2 кг Размер 2: длина 25 см, 1.3 кг Размер 3: длина 35 см, 1.4 кг Размер 4: длина 40 см, 1.5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	


19. Подголовник Pro Plush регулируемый		Д, В, масса Размеры: 1. Низкий: 15-35см, 1.2 кг 2. Стандартный: 20-45, 1.5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
20. Подголовник Black Bear	предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка. Более основательная поддержка.	Д x В, масса размеры: 1.Стандартный: 27 x 26 см, 1.2 кг 2.Удлинённый: 29 x 26 см, 1.25 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
21. Подголовник LINX Plush	предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка	В, масса Размеры: 1: 20 см, 1.2 кг 2: 25 см, 1.3 кг 3: 35 см, 1.4 кг 4. 40 см, 1.5 кг	Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
22. Подголовник LINX Plush регулируемый	предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка, регулируемый	В, масса Размеры: 1.Низкий: 15-35см, 1.2 кг 2.Стандартный: 20-45, 1.5 кг	Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
23. Подголовник Carseat	предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка	В x Д, масса 24 x 43 см, 1,3 кг	Кресло-коляска Carseat Pro	

24. Подголовник Carseat удлинённый	предназначен для опоры головы, уравнивает вертикальное положение ребёнка	В x Д, масса 24x37 см, 1,2 кг	Кресло-коляска Carseat Pro	
25. Регулируемое крепление подголовника	Крепит подголовник в разных плоскостях для удобства пользователя	В x Д, масса 10 x 5 x 3 см, 0.5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
Активная повязка для лба – это повязка, позволяющая фиксировать голову людей со слабыми мышцами шеи от падения вперёд и в стороны.				
26. Активная повязка для лба Zitzi	Опора, оказывающая дополнительную фиксацию головы и шеи по бокам.	В x Д x Ш, масса 2 x 10 x 1 см, 0.2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy,	

			Anatomic Soft Sits Seabass Pro Кресло-коляска Carseat Pro	
27. Активная повязка для лба Junior, Pro Serie	Повязка, которая позволяет фиксировать голову людей со слабыми мышцами шеи. Должна использоваться вместе с опорой.	Д x В x Ш, масса 20 x 5 x 1 см, 0.1 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Carseat Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
28. Активная повязка для лба Adult, Pro Serie	Повязка, которая позволяет фиксировать голову людей со слабыми мышцами шеи. Должна использоваться вместе с опорой.	Д x В x Ш, масса 20 x 5 x 3 см, 0.4 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

29. Крепежный кронштейн для активной повязки для лба	Крепежный кронштейн для плюшевого подголовника, Pro Serie. Не обязателен для подголовников Pro Junior и Pro Single.	В x Д x Ш, масса 5 x 10 x 1 см, 0.3 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
30. Крепление для подголовника	Съемное крепление. С помощью него подголовник крепится к спинке кресла.	В x Д x Ш, масса 6 x 6 x 1 см, 0.2 кг	Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
31. Крепление для подголовника Anatomic sits	Устройство, позволяющее крепить подголовник в спинке кресла.	Д x Ш x В, масса 5 x 5 x 5 см, 0.3 кг	Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro	
32. Верхний крепежный кронштейн, удлиненный	Предназначен для верхнего крепления ремней	Д x В x Ш, масса 12 x 5 x 0.5, 0.2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Carseat Pro	
33. Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro	Крепится к модулю сиденья. Нижний крепежный кронштейн для ремня идет в стандартной комплектации	В x Д x Ш, масса 4 x 5 x 0.5, 0.2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	

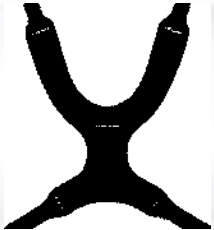34. Нижний крепежный кронштейн	Предназначен для нижнего крепления ремней	В х Д х Ш, масса 4 х 5 х 0.5, 0.2 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, кресло-коляска Carseat Pro	
35. Грудной ремень Х-образный Pro	Даёт усиленную поддержку грудной клетке. Предотвращает выпадение из коляски	Ш х Д, масса Размер 1 (XS): 20x26 см, 200 г Размер 2 (S): 21X31 см, 200 г Размер 3(M): 25X37 см, 200 г Размер 4 (L): 33X50 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Carseat Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
36. Грудной ремень Х-образный Exclusive	Даёт усиленную поддержку грудной клетке. Предотвращает выпадение из коляски.	Ш х Д, масса Размер 1 (XS): 20x26 см, 200 г Размер 2 (S): 21X31 см, 200 г Размер 3(M): 25X37 см, 200 г Размер 4 (L): 33X50 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Carseat Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	

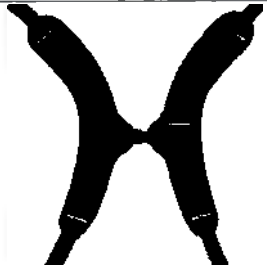			Pengy Pengy, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
37. Грудной ремень Н-образный Pro	Обеспечивает поддержку для торса и плеч. Он эффективно предотвращает вращение. Так же подходит для пользователей, у которых спереди на одежде пуговицы.	Размер одной половины – Ш х Д, масса: Размер 1 (XS): 8,5x19,5 см, 200 г Размер 2 (S): 10x31,5 см, 200 г Размер 3 (M): 11,5x39,5 см, 200 г Размер 4 (L): 11,5x46 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

38. Грудной ремень H-образный Exclusive	Обеспечивает поддержку для торса и плеч. Он эффективно предотвращает вращение. Так же подходит для пользователей, у которых спереди на одежде пуговицы.	Размер одной половины – Ш х Д, масса: Размер 1 (XS): 8,5х19,5 см, 200 г Размер 2 (S): 10х31,5 см, 200 г Размер 3 (M): 11,5х39,5 см, 200 г Размер 4 (L): 11,5х46 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
39. Грудной ремень Zitzi Delfi Pro	Фиксирует корпус пациента в области груди. Поставляются без крепежей, поэтому вам стоит дополнить их нижними и верхними крепежными кронштейнами	Д х В х Ш, масса 30 х 6 х 1 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
40. Грудной ремень Soft Pro	Фиксирует корпус пациента в области груди. Поставляются без крепежей, поэтому вам стоит дополнить их нижними и верхними крепежными кронштейнами	Д х В х Ш, масса Размер 1 (детский): 20 х 6 х 1, 200 г Размер 2 (взрослый): 40 х 6 х 1, 250 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass	

			Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
Бедренные ремни предназначены для правильного позиционирования и фиксации ребёнка в области бёдер, предотвращая соскальзывание корпуса с коляски.				
41. Бедренный ремень Pro	С двумя точками крепления на каждой стороне, ремень стабилизирует таз и бедренные кости в правильном положении, соответственно сокращая сдвиг и ненужное давление на копчик и кости.	Д x Ш, масса Размер 1 (XS): 25 x 6 см, 200 г Размер 2 (S): 30 x 6 см, 200 г Размер 3 (M): 35 x 6 см, 200 г Размер 4 (L): 40 x 6 см, 200 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

42. Бедренный ремень Comfort Pro	С одной точкой крепления на каждой стороне, ремень стабилизирует таз и бедренные кости в правильном положении, соответственно сокращая сдвиг и ненужное давление на копчик и кости	Д х Ш, масса Размер 1(S): 30х6 см, 250 г Размер 2 (M): 35х6 см, 200 г Размер 3 (L): 40х6 см, 200 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
43. Бедренный ремень Exclusive	с двумя точками крепления на каждой стороне, ремень стабилизирует таз и бедренные кости в правильном положении, соответственно сокращая сдвиг и ненужное давление на копчик и кости. Из ткани Exclusive	Д х Ш, масса Размер 1(S): 30х6 см, 200 г Размер 2 (M): 35х6 см, 200 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass	

			Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
44. Бедренный антиротационный ремень	с двумя точками крепления на каждой стороне, ремень стабилизирует таз и бедренные кости в правильном положении, соответственно сокращая сдвиг и ненужное давление на копчик и кости. Предотвращает перекручивание.	Д х Ш, масса Размер 1 (XS): 25 х 6 см, 200 г Размер 2 (S): 30 х 6 см, 200 г Размер 3 (M): 35 х 6 см, 200 г Размер 4 (L): 40 х 6 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
45. Фиксатор голеностопа Exclusive	Фиксирует и крепит голеностоп к коляске (на липучках)	Размер 1 (S): длина не более 30 см (обхват голеностопа 16-24 см), 300 г Размер 2 (M): длина не более 35 см (обхват голеностопа 22-28 см), 300 г Размер 3 (L): длина не более 40 см (обхват голеностопа 26-32 см), 300 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex,	

			Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
46. Фиксатор голеностопа Soft	Фиксирует и крепит голеностоп к коляске (на липучках)	Размер 1 (S): длина не более 30 см (обхват голеностопа 16-24 см), 300 г Размер 2 (M): длина не более 35 см (обхват голеностопа 22-28 см), 300 г Размер 3 (L): длина не более 40 см (обхват голеностопа 26-32 см), 300 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
47. Фиксатор голеностопа Pro	Фиксирует и крепит голеностоп к коляске(с пряжкой)	Размер 1 (S): длина не более 30 см (обхват голеностопа 16-24 см), 300 г Размер 2 (M): длина не более 35 см (обхват голеностопа 22-28 см), 300 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	

		Размер 3 (L): длина не более 40 см (обхват голеностопа 26-32 см), 300 г	Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
48. Ремень для ступней	Крепится к подножке и позволяет зафиксировать ступню	Размер 1 (S): длина не более 52 см, 300 г Размер 2 (L): длина не более 70 см, 300 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
49. Поддержка таза	Опция, необходимая для правильного позиционирования таза пользователя	Д x В x Ш, масса Размер 1 (S): 25 x 8 x 1 см, 300 г Размер 2 (L): 30 x 8 x 1 см, 300 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Carseat Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	

50. Фиксатор кисти Exclusive	Помогает зафиксировать какой-то предмет в ладони пациента	Размер 1 (S): длина ладони 0-10 см Размер 2 (M): длина ладони 10-15 см Размер 3 (L): длина ладони 16-22 см	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
51. Браслет	Фиксирует и крепит запястье к коляске. Браслеты поставляются попарно	Ш x Д, масса Размер 1 (S) - 5x16 см, 300 г Размер 2 (L) - 5x20 см, 300 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass	

			Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
52. Браслет Soft	Фиксирует и крепит запястье к коляске. Браслеты поставляются попарно	Ш x Д, масса Размер 1 (S) - 5x16 см, 300 г Размер 2 (L) - 5x20 см, 300 г	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
53. Ремни для ног	Фиксируют и крепят ногу к коляске	Д x В x Ш, масса Размер 1(S): 15 x 5 x 1, 200 г Размер 2 (L): 19 x 5 x 1, 200 г	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
Подлокотник – это ручка у кресла, предназначена для опоры локтя.				

54. Подлокотник	Крепится к сиденью – на платформу сиденья рамы. Поставляется попарно	Д х Ш х В, масса Размер 1: 18х6,6х14-20,5; 300 г Размер 2: 19,5х7,5х14-20,5; 300 г Размер 3: 23х9х19-28; 300 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
55. Подлокотник Guppy	Два подлокотника, соединенные в одну систему. Крепятся к раме	Д х Ш х В, масса 40 x 15 x 10 см, 4 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
56. Подлокотник Zitzi Sharky Pro	Крепится к сиденью. Регулируется в трёх направлениях. Поставляется попарно	Д х Ш, масса Размер 1: 26,5 x 9,5 см, 5 кг Размер 2: 30,5 x 9,5 см, 5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
57. Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный	Крепится к спинке.	Д х Ш, масса Размер 1: 26,5 x 9,5 см, 5 кг Размер 2: 30,5 x 9,5 см, 5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
58. Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной	Позволяет отводить подлокотник в сторону для более комфортного выхода	Д х Ш, масса Размер 1: 26,5 x 9,5 см, 5 кг Размер 2: 30,5 x 9,5 см, 5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	

	из коляски. Крепится к спинке.		Pro Seabass Pro	
59. Опора для предплечья	Создаёт дополнительную опору для пациента в районе предплечья.	В x Д x Ш, масса 12 x 15 x 1 см, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
60. Покрытие опоры для предплечья	Мягкие накладки из ткани на опору для предплечья	Д x В x Ш, масса 12 x 15 x 1 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
61. Подлокотная опора	Мягкие накладки на подлокотник.	Д x В x Ш, масса Размер 1: 20 x 5 x 2 см, 200 г Размер 2: 22 x 5 x 2 см, 200 г Размер 3: 24 x 5 x 2 см, 200 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
62. Крепежи опоры для предплечья левый/правый	Правый и левый. Крепит опору для предплечья к спинке коляски	Д x В x Ш, масса 15 x 5 x 1 см, 500 г	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	

63. Крепеж подлокотника Guppy	Деталь подлокотника (без боковых накладок), которая крепится к спинке.	Д х В х Ш, масса 15 х 8 х 5 см, 1 кг	Pro Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
64. Крепеж подлокотника складной	Крепится к спинке. Может откидываться в сторону, для облегчения выхода из коляски.	Д х Ш х В, масса 30 х 8 х 15 см, 3,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
65. Крепеж подлокотника фиксированный	Крепится к спинке.	Д х Ш х В, масса 30 х 8 х 15 см, 3,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
66. Крепежи подлокотника, правый / левый	Крепят подлокотник к коляске. (крепится к сиденью)	Д х Ш х В, масса 35 х 8 х 15 см, 4 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
67. Столик Zitzi Delfi Pro	Предназначен для различных занятий и кормления пользователя. Позволяет пользователю размещать на нём какие-либо предметы. Изготовлен из легко моющегося пластика.	Д х Ш, масса Размер 1: 47,5х44 см, 1,2 кг Размер 2: 53,5х50 см, 1,2 кг Размер 3: 53,5х51 см, 1,3 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
68. Столик Zitzi Sharky Pro		Д х Ш, масса Размер 1: 67х60 см, 1,5 кг Размер 2: 67х65 см, 1,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	

69. Столик откидной Zitzi Delfi Pro	Предназначен для различных занятий и кормления пациента. Позволяет пользователю размещать на нём какие-либо предметы. Изготовлен из легко моющегося пластика. Откидывается.	Д x Ш, масса Размер 2: 53,5x50 см, 1,2 кг Размер 3: 53,5x51 см, 1,3 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
70. Столик откидной Zitzi Sharky Pro	Предназначен для различных занятий и кормления пациента. Позволяет пользователю размещать на нём какие-либо предметы. Изготовлен из легко моющегося пластика. Откидывается.	Д x Ш, масса Размер 1: 67x60 см, 1,5 кг Размер 2: 67x65 см, 1,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
71. Столик с усилен. крепежами Zitzi Delfi Pro	Предназначен для удобства игры и кормления пациента. Позволяет пользователю размещать на нём какие-либо предметы. Изготовлен из легко моющегося пластика. Способен выдержать более сильные нагрузки.	Д x Ш, масса Размер 2: 53,5x50 см, 1,2 кг Размер 3: 53,5x51 см, 1,3 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
72. Столик с усилен. крепежами Zitzi Sharky Pro	Предназначен для удобства игры и кормления пациента. Позволяет пользователю размещать на нём какие-либо предметы. Изготовлен из легко моющегося пластика. Способен выдержать более сильные нагрузки.	Д x Ш, масса Размер 1: 67x60 см, 1,5 кг Размер 2: 67x65 см, 1,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
73. Защитное покрытие на столик	Защищает столик от царапин	В x Д x Ш, масса Размер 1: 60x50 см, 0,2кг Размер 2: 66x56 см, 0,3кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	

74. Крепеж столика, складной	Крепеж для откидного столика	Д х Ш, масса Размер 1: 50x10 см, 1,5 кг Размер 2: 60x10 см, 1,8 кг	, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
75. Крепеж столика усиленный, складной	Усиленный крепёж для откидного столика	Д х Ш, масса 50x40 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
76. Запорные устройства для столика, правое и левое	Предназначена для укрепления столика	12x5x1 см, 0,5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
77. Столик Carseat Pro	Предназначен для удобства игры и кормления пациента. Позволяет ребенку размещать на нём какие-либо предметы.	Д х Ш х В, масса 15x5x1 см, 0,2 кг	Carseat Pro	


78. Столик Pengy	Предназначен для удобства игры и кормления пациента. Позволяет ребенку размещать на нём какие-либо предметы. Изготовлен из легко моющегося пластика.	Д х Ш, масса 35x25, 3 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	
79. Подножка Carseat Pro	Устройство для поддержки ног. С единой базой.	Д х Ш, масса 30x20 см, 0,2 кг	Carseat Pro	
80. Единая подножка Zitzi Delfi Pro	Устройство для поддержки ног. С единой базой.	Д х Ш, масса Размер 1: 31,5x19,5 см, 1 кг Размер 2: 34,5x22,5 см, 1 кг Размер 3: 38x26 см, 1 кг	, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
81. Единая подножка Pengy	Устройство для поддержки ног. С единой базой.	Д х Ш, масса 25x20см, 1 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	

82. Единая подножка Seabass Pro	Устройство для поддержки ног. С единой базой.	Д х Ш, масса Размер 1, 2 30х20см, 1,5 кг Размер 3: 30х20см, 2кг	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
83. Платформа для ног	Устройство для поддержки ног. С единой базой. Подъемная.	Д х Ш, масса Размер 1: 28 х19 см, 1,5 кг Размер 2: 32 х22 см, 1,6 кг	Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, , Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy	
84. Регулируемая единая подножка	Устройство для поддержки ног. С единой базой. Регулируется в разных направлениях.	Д х Ш, масса Размер 1: 25х18 см, 1,5 кг Размер 2: 25х19 см, 1,8 кг Размер 3: 25х20 см, 1,8 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
85. Откидная единая подножка	Устройство для поддержки ног. С единой базой. Может откидываться кверху.	Д х Ш, масса Размер 1: 25х18 см, 1,8 кг Размер 2: 25х19 см, 1,9 кг Размер 3: 25х20 см, 1,9 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits	

			Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
86. Откидная единая подножка Seabass Pro	Устройство для поддержки ног. С единой базой. Может откидываться кверху.	Д х Ш, масса Размер 1: 25х18 см, 1,9 кг Размер 2: 25х19 см, 2 кг Размер 3: 25х20 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
87. Раздельные подножки	Устройство для поддержки ног. С раздельными основаниями для ступней.	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5х19 см, 1,5 кг Размер 2: 16х22 см, 1,6 кг Размер 3: 18х22,5 см, 1,7 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
88. Раздельные подножки Seabass Pro	Устройство для поддержки ног. С раздельными основаниями для ступней.	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5х19 см, 1,5 кг Размер 2: 16х22 см, 1,6 кг Размер 3: 18х22,5 см, 1,7 кг	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
89. Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro	Устройство для поддержки ног. С раздельными основаниями для ступней.	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5х19 см, 1,5 кг Размер 2: 16х22 см, 1,6 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	


90. Регулируемые раздельные подножки	Устройство для поддержки ног. С раздельными основаниями для ступней. Могут регулироваться в различных направлениях.	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5х19 см, 1,5 кг Размер 2: 16х22 см, 1,6 кг Размер 3: 18х22,5 см, 1,7 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
91. Откидные раздельные подножки	Устройство для поддержки ног. С раздельными основаниями для ступней. Могут откидываться вверх.	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5х19 см, 1,5 кг Размер 2: 16х22 см, 1,6 кг Размер 3: 18х22,5 см, 1,7 кг	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
92. Откидные регулируемые подножки	Устройство для поддержки ног. С раздельными основаниями для ступней. Могут регулироваться в различных направлениях и откидываться вверх.	Д х Ш, масса Размер 1: 25х18 см, 1,8 кг Размер 2: 25х19 см, 1,9 кг Размер 3: 25х20 см, 1,9 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
93. Подушка для единой подножки	Является смягчающей накладкой на подножку для большего комфорта.	Д х Ш, масса Размер 1: 15х10 см, 0,2 кг Размер 2: 18х10 см, 0,2 кг Размер 3: 19х10 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

94. Подушка для раздельных подножек	Является смягчающими накладками на подножки для большого комфорта.	Д х Ш, масса Размер 1: 20х10 см, 0,2 кг Размер 2: 22х10 см, 0,2 кг Размер 3: 24х10 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
95. Адаптер для подвижной подножки	Подходит как для единой, так и для раздельных подножек. Не совместим с опорой для икр и высокими бортиками подножки	В х Д х Ш, масса 15х4х4 см, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

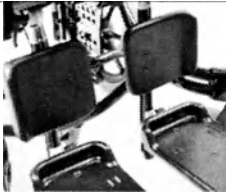96. Опора для икр, с одним держателем	Поддерживает ноги пациента в области икр. 1 держатель	Ш х Д, масса Размер 0: 9,5х11 см, 0,2 кг Размер 1: 12х14,5 см, 0,2 кг Размер 2: 15х16 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
97. Опора для икр, с двумя держателями	Поддерживает ноги пациента в области икр. 2 держателя	Ш х Д, масса Размер 1: 12х14,5 см, 0,2 кг Размер 2: 15х16 см, 0,2 кг Размер 3: 16х22,5 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
98. Опора для икр Pengy	Поддерживает ноги пациента в области икр.	Ш х Д, масса 12х14,5 см, 0,2 кг	Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Pengy, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Pengy	

99. Подушка для опоры для икр		Д х Ш, масса Размер 1: 16x10 см, 0,2 кг Размер 2: 15x10 см, 0,2 кг Размер 3: 16x10 см, 0,2 кг Размер 4: 16x10 см, 0,2 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
100. Пластиковая часть опоры бедра усиленная, правая и левая	Поддерживают ноги пациента в области нижней части бедра. Рассчитана на более сильную нагрузку	Д х Ш, масса Размер 1: 15x10 см, 0,6 кг Размер 2: 19x10 см, 0,6 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
101. Пластиковая часть опоры бедра, правая и левая	Поддерживают ноги пациента в области нижней части бедра	Д х Ш, масса Размер 1: 16x10 см, 0,6 кг Размер 2: 20x10 см, 0,6 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
102. Пластиковая часть опоры бедра, медиально/латеро	Поддерживают ноги пациента в области нижней части бедра. Могут регулироваться по высоте	Д х Ш х В, масса Размер 1: 25x12x13 см, 0,5 кг Размер 2: 30x12x13 см, 0,5 кг Размер 3: 35x12x13 см, 0,5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	

льно +4см	внешнего и внутреннего края.			
103. Опора бедра, медиально/латерально +4 см	Поддерживают ноги пациента в области нижней части бедра. Могут регулироваться по высоте внешнего и внутреннего края. Включает в себя покрытие	Д х Ш х В, масса Размер 1: 25х12х13 см, 0,6 кг Размер 2: 30х12х13 см, 0,6 кг Размер 3: 35х12х13 см, 0,6 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
104. Покрытие опоры бедра	Мягкие накладки, которые надеваются на опоры бедра	Д х Ш х В, масса Размер 1: 10х6х3 см, 0,1 кг Размер 2: 12х6х3 см, 0,1 кг Размер 3: 13х6х3 см, 0,1 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
105. Покрытие опоры бедра Zitzi Sharky Pro	Мягкие накладки, которые надеваются на опоры бедра	Д х Ш х В, масса Размер 1: 15х6х3 см, 0,1 кг Размер 2: 17х6х3 см, 0,1 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
106. Опора для стопы, правая / левая	Пластины отдельных подножек (пара)	Д х Ш х В, масса Размер 3: 14х12х3 см, 0,5 кг Размер 4: 16х12х3 см, 0,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
107. Крепеж подножек	Крепят подножки к креслу	Д х Ш х В, масса 10х5х3 см, 0,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	

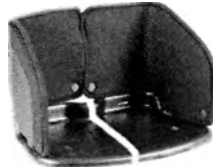108. Высокие бортики для подножек	Предотвращают соскальзывание ступней назад или в бок. Обязательно комплектуется подножкой	Размеры, вес Размер 1: 25x34x5 мм, 1 кг Размер 2: 30x34x5 мм, 1 кг Размер 3: 35x34x5 мм, 1 кг Размер 4: 40x34x5 мм, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
109. Высокие бортики для отдельных подножек	Предотвращают соскальзывание ступней назад или в бок. Обязательно комплектуется подножкой	Размеры, вес Размер 1: 25x17x5 мм, 1 кг Размер 2: 30x17x5 мм, 1 кг Размер 3: 35x17x5 мм, 1 кг Размер 4: 40x17x5 мм, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
110. Подножка МН	Служит для крепления подножки к коляске	Д x Ш x В, масса 14x6x2 см, 0,2 кг	Zitzi Pengy Pengy, Zitzi Delfi Pro Pengy, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Pengy	

111. Непромокаемое покрытие	Покрытие для сиденья коляски, непромокаемое	Ш х Д х В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
112. Подушка сиденья	Обивка сиденья. Цвета: серый, синий, красный	Ш х Д х В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг	Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
113. Подушка сиденья T-foam	Обивка сиденья с наполнителем T-foam. Серая.	Ш х Д х В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
114. Подушка сиденья Coolmax	Обивка сиденья Coolmax. Цвета: черный, синий, оранжевый	Ш х Д х В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	
115. Подушка сиденья Zitzi Sharky Pro	Обивка сиденья.	Ш х Д х В, масса Размер 1: 40x60x1 см, 0,5 кг Размер 2: 50x70x1 см, 0,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	

116. Подушка сиденья Алькантара	Обивка сиденья. Чёрная, синяя, серая.	Ш х Д х В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг	Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
117. - Пластина адаптера	Позволяет установить кресло на пластину адаптера, установленную на раму. Усиленная.	Ш х Д х В, масса Размер 1: 25x25x2 см, 2 кг Размер 2: 30x30x2 см, 3 кг Размер 3: 35x35x2 см, 3,5 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
118. Пластина адаптера Zitzi Sharky Pro	Пластина адаптера с внутренней резьбой. Позволяет установить кресло Zitzi Sharky Pro на универсальную пластину адаптера, установленную на раму.	Д х Ш х В, масса 35x30x8 см, 1 кг	, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	

119.	Пластина адаптера с внешней резьбой	Пластина адаптера с внешней резьбой. Подходит для всех рам. В комбинации с пластинами адаптера для Delfi Pro и Sharky позволяет установить соответствующие кресла на любые рамы.	Д x Ш x В, масса 10x10x3 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
120.	Адаптер сиденья	Позволяет установить кресло Zitzi Delfi Pro на раму Guppy, Seabass Pro и Flipper Pro.	Д x Ш x В, масса Размер 1: 23x23x1 см, 1 кг Размер 2: 25x25x1 см, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
121.	Адаптер сиденья	Позволяет установить кресла Zitzi Delfi Pro, Anatomic Sits, Anatomic Soft Sits на любую раму (с пластинами адаптера с внутренней и внешней резьбой)	Д x Ш x В, масса 30x30x2 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
122.	Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro	Позволяет установить кресло Delfi Pro на различные рамы.	Д x Ш x В, масса 30x30x2 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	

123. Адаптер сиденья универсальный	Позволяет установить кресла на любую раму.	Д x Ш x В, масса 30x30x2 см, 2 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
124. Адаптер сиденья Carseat Pro	Позволяет установить кресло Carseat Pro на любую раму.	Д x Ш x В, масса 35x30x10 см, 1,5 кг	Carseat Pro	
125. Базовая платформа адаптера Pengy	Платформа для установки кресла Pengy на раму	Д x Ш x В, масса 35x30x5 см, 1 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	

126. Зимний мешок	Термо-мешок для холодной погоды. Может быть в двух вариантах – со спинкой и без. Имеет спереди застёжку для удобства.	Д х Ш х В, масса Размер 1: 100х30х2 см, 0,5 кг Размер 2: 110х40х2 см, 0,5 кг Размер 3: 120х45х2 см, 0,5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
127. Мобиль	Крепится к спинке коляски и позволяет подвешивать игрушки (игрушки в комплект не входят)	Ш х Д, масса 40х50 см, 0,5 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
128. Капюшон	Крепится к спинке коляски. Служит для защиты от дождя и солнца.	В х Д х Ш, масса 40х50х20 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
129. Капюшон Pengy	Крепится к спинке коляски. Служит для защиты от дождя и солнца.	В х Д х Ш, масса 100х50х80 см, 2 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	

130. Газовая пружина	Служит для откидывания и динамической поддержки спинки или для изменения угла наклона сиденья. Производитель "Aratron" (Швеция)	Длина, мм, сила, Н, масса: 185мм, 200 Н, 1 кг 205мм, 300 Н, 1 кг 185мм, 500 Н, 1 кг 365 мм, 200 Н, 1 кг 380 мм, 800 Н, 1 кг 380 мм, 1200 Н, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
131. Ручка для толкания	Служит для толкания коляски	Размеры, масса Размер 1: 40x20x4 см, 2 кг Размер 2: 45x25x4 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, , Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper	

132. Ручка для сопровождающего лица	Служит для управления коляской сопровождающим лицом	Размеры, масса 50x30x4 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex	
133. Ручка для сопровождающего лица	Служит для управления коляской сопровождающим лицом (для установке на раме)	Размеры, масса 50x25x4 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro	
134. Ручка для сопровождающего лица	Служит для управления коляской сопровождающим лицом (для установки под сиденьем)	Размеры, масса 50x30x4 см, 2 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

135. Ручка для сопровождающего лица	Служит для управления коляской сопровождающим лицом	Размеры, масса 40x30x4 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
136. Ручки для сопровождающего лица Seabass Pro	Служат для управления коляской сопровождающим лицом. Раздельные. Могут быть регулируемыми и складными.	Размеры, масса 50x3x3 см, 0,5 кг	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
137. Ручка М6х25	Барашковый винт. Служит для закрепления каких-либо деталей	Д x Ш x В, масса 4x4x4 см, 0,2 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
138. Педаль (для регулировки высоты)	Позволяет регулировать высоту сиденья	Д x Ш x В, масса 15x7x5 см, 0,5 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex	
139. Набор кронштейнов для транспортировки	Состоит из ручек и крепежей, которые облегчают транспортировку коляску с пациентом (перенос через препятствие, занос в общественный	Д x Ш x В, масса 15x15x5 см, 2 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

	транспорт)			
140. Ручка откидывания	Служит для откидывания спинки.	Д x Ш x В, масса 20x3x2 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
141. Петля для регулировки наклона сиденья	Крепится к сиденью с помощью липучки. Если потянуть за петлю, будет регулироваться наклон сиденья.	Д x Ш x В, масса Размер 1: 15x2x2 см, 0,1 кг Размер 2: 20x2x2 см, 01, кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
142. Передние колеса цельнолитые Pengy	Могут устанавливаться вместо стандартных (обладают повышенной проходимостью. Подходят для зимы и бездорожья)	Диаметр 20 см, 30 см, масса 1 кг	Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Pengy, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Pengy	
143. Передние колеса цельнолитые Seabass Pro	Передние колёса коляски, цельнолитые	Диаметр 15 см, 18 см, масса 1 кг	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
144. Передние колеса цельнолитые Guppy	Передние колёса коляски, цельнолитые	Диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см, масса 1,2 кг	Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, r, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy	
145. Передние колеса пневматические, 18 см	Передние колеса пневматические	Диаметр 18 см, масса 1 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft	

			Sits Seabass Pro	
146. Задние колеса цельнолитые Flipper Pro Flex	Задние колеса цельнолитые	Диаметр 30 см, масса 1,2 кг Диаметр 40 см, масса 1,3 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex	
147. Задние колеса цельнолитые	Задние колеса цельнолитые	Диаметр 30 см, масса 1,2 кг Диаметр 40 см, масса 1,3 кг Диаметр 50 см, масса 1,4 кг Диаметр 55 см, масса 1,5 кг Диаметр 60 см, масса 1,6 кг	Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
148. Задние колеса пневматические	Задние колеса пневматические	Диаметр 30 см, масса 1,2 кг Диаметр 40 см, масса 1,3 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
149. Задние колеса пневматические Guppy, 40 см	Задние колеса пневматические	Диаметр 40 см, масса 1,3 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	

150. Задние колеса пневматические Guppy	Задние колеса пневматические	Диаметр 50 см, масса 1,4 кг Диаметр 55 см, масса 1,5 кг Диаметр 60 см, масса 1,6 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
151. Антипрокидыватель Guppy	Предотвращает опрокидывание коляски назад.	В x Д x Ш, масса 20x15x15 см, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
152. Антипрокидыватель правый/левый	Предотвращает опрокидывание коляски назад.	В x Д x Ш, масса 20x15x3 см, 1 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
153. Защита спиц	Предотвращает попадание пальцев в спицы колёс. Диаметр 50 см, 55 см, 60 см	Диаметр, масса: 40 см, 0,2 кг 42 см, 0,2 кг 50 см, 0,3 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
154. Брызговик	Защищает пользователя от брызг Для колёс диаметром 50 см, 55 см, 60 см	Д x Ш x В, масса 40x5x10 см, 0,5 кг 45x5x10 см, 0,5 кг 50x5x10 см, 0,6 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

155. Вилка переднего колеса	Крепит колесо к коляске	В х Д х Ш, масса 8х10х5 см, 0,5 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
156. Ось быстросъемного колеса	Служит основой для надевания колеса.	Размер 1: для колеса диаметром 30/40 см, Д х Ш - 98х12мм, масса 0,1 кг Размер 2: для колеса диаметром 50/60 см, Д х Ш - 103х12мм, масса 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
157. Барабанный тормоз (правый и левый)	Используется для торможения коляски сопровождающим лицом.	Размер 1: для колеса диаметром 30/40 см, Д х Ш - 10х50 мм, масса 1 кг Размер 2: для колеса диаметром 50/60 см, Д х Ш - 12х53 мм, масса 1,3 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
158. Крепеж брызговиков	Помогает закрепить брызговики на колесах	Д х Ш х В, масса Размер 1: для колес 50 см - 20х15х0,5 см, 1 кг Размер 2: для колес 55 см - 25х20х0,5 см, 1,1 кг Размер 3: для колес 60 см - 30х20х0,5 см, 1,2 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
159. Ручка тормоза с красным стопорным механизмом	При нажатии на рычаг ручки происходит торможение коляски	Д х Ш х В, масса 15х7х2 см, 1 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

160. Трос ручного тормоза	Управляет колодками барабанного тормоза	Размеры, масса Seabass: 105/123 см, 0,2 кг Guppy: 125/143 см, 0,3 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
161. Стояночные тормоза	Стандартные и удлиненные. Жестко фиксирует колеса коляски, чтобы она не могла ехать. Необходимо укомплектовать их с креплениями	Д x Ш x В, масса 12x7x4 см, 0,1 кг 15x7x4 см, 0,1 кг 30x4x4 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
162. Педаль тормоза Pengy, пластиковая	Фиксирует задние колеса небольшого диаметра.	Д x Ш x В, масса 9x6x1 см, 0,1 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro	
163. Крепление для стояночного тормоза для колес	Крепит стояночный тормоз к коляске	Д x Ш x В, масса Размер 1: для колес 30/40 см - 14x3x3 см, 0,2 кг Размер 2: для колес 40 см - 20x4x3 см, 0,3 кг Размер 3: для колес 50/60 см - 22x4x3 см, 0,3 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
164. Зубчатая муфта	Фиксирует ручку для толкания в нужном положении	Д x Ш x В, масса 6x1x1 см, 0,1 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
165. Клин	Для подкладывания под подушку сиденья для изменения угла наклона	Д x Ш x В, масса 35x15x5 см, 0,1 кг	Carseat Pro	

166. Профиль спинки	Основание спинки, к которому крепится пластиковая часть и которое крепится к сиденью.	Ш х Д х В, масса 8х70х1,5 см, 1 кг 8х75х1,5 см, 1,2 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
167. Пластиковая часть спинки	Крепится к основанию спинки.	Ш х Д х В, масса 40х60х3 см, 1 кг 50х70х3 см, 1,5 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
168. Подушка спинки Zitzi Delfi Pro	Покрытие, которое надевается на пластиковую часть спинки. Цвета: серый, синий, красный	Ш х Д, масса Размер 1: 40х60 см, 0,5 кг Размер 2: 50х70 см, 0,5 кг Размер 3: 25х40 см, 0,2 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
169. Подушка спинки Carseat Pro	Покрытие, которое надевается на пластиковую часть спинки. Цвета: серый, синий, красный	Ш х Д, масса Размер 2: 25х40 см, 0,2 кг Размер 3: 25х50 см, 0,2 кг	Carseat Pro	

170. Подушка спинки Coolmax	Покрытие Coolmax, которое надевается на пластиковую часть спинки. Цвета: черный, синий, оранжевый	Ш х Д, масса 25х35 см, 0,2 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy	
171. Подушка спинки Zitzi Sharky Pro	Покрытие, которое надевается на пластиковую часть спинки. Цвета: серый, синий, красный	Ш х Д, масса Размер 1: 40х60 см, 0,2 кг Размер 2: 45х70 см, 0,2 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
172. Подушка спинки из Алькантары Zitzi Delfi Pro	Покрытие, которое надевается на пластиковую часть спинки. Цвета: черный, синий	Ш х Д, масса Размер 1: 40х60 см, 0,5 кг Размер 2: 50х70 см, 0,5 кг Размер 3: 25х40 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
173. Подушка спинки из Алькантары Carseat Pro	Покрытие, которое надевается на пластиковую часть спинки.	Ш х Д, масса Размер 2: 25х40 см, 0,2 кг Размер 3: 25х50 см, 0,2 кг	Carseat Pro	
174. Подушка спинки из Алькантары Zitzi Sharky Pro	Покрытие, которое надевается на пластиковую часть спинки.	Ш х Д, масса Размер 1: 40х60 см, 0,2 кг Размер 2: 45х70 см, 0,2 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	

175. Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro	Присоединяется при помощи липучек	Д x Ш x В, масса 18x12x7 см, 0,1 кг	Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro	
176. Поддержка поясницы Zitzi Sharky Pro	Располагается под обшивкой спинки. Используется чтобы создавать люмбальный изгиб.	Ш x В x толщина, масса Размер 1: 25x50x0,5 см, 0,1 кг Размер 2: 30x60x0,5 см, 0,1Kg	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
177. Пластина, регулируемая по глубине	Пластина, с помощью которой изменяется глубина сиденья	Д x Ш x В, масса Размер 1: 15x13x0,5 см, 0,2 кг Размер 2: 17x15x0,5 см, 0,2 кг	Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro	
178. Упор для сопровождающего лица Seabass Pro	Упор, который облегчает сопровождающему лицу приподнимать передние колеса коляски для преодоления препятствий.	Д x Ш x В, масса 20x6x2 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	
179. Упор для сопровождающего лица Guppy	Упор, который облегчает сопровождающему лицу приподнимать передние колеса коляски для преодоления препятствий.	Д x Ш x В, масса 20x8x2 см, 0,2 кг	Zitzi Delfi Pro Guppy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Guppy	
180. Корзинка	Предназначается для складывания покупок или других необходимых вещей.	Д x Ш x В, масса 40x40x20 см, 0,3 кг	Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Zitzi Delfi Pro Pengy, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Pengy	

181.	Дождевик	Служит для защиты пользователя от дождя и других природных осадков.	В х Д х Ш, масса 120x50x50 см, 0,1 кг	Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy, Carseat Pro, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Pengy	
182.	Вертикальная рама	Предназначается для пользователей, не могущих находиться в сидячем положении. Пользователь может находиться в горизонтальном или вертикальном положении. Не складная.	Длина х ширина х глубина, масса 99x40x20 см, 10 кг 120x50x30 см, 15 кг	Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro	

3. Показания и противопоказания

Показания к применению:

Выраженные нарушения ходьбы и стояния в сочетании с выраженными нарушениями схвата и удержания предметов вследствие заболеваний, травм, врожденных пороков суставов, костей; заболеваний, травм центральной и периферической нервной системы:

- стойкие деформации или заболевания нижних конечностей, таза или позвоночника в сочетании со стойкими заболеваниями или деформациями верхних конечностей;
- пареза, выраженный парез обеих нижних конечностей в сочетании со стойкими заболеваниями, деформациями и парезами верхних конечностей;
- пареза, выраженный парез одной нижней конечности в сочетании со стойкими заболеваниями, деформациями и парезами верхних конечностей;
- гемиплегия, значительно выраженный гемипарез.

Противопоказания:

Последствия заболеваний травм и дефектов, приводящих к прогрессированию патологического процесса в положении пациента сидя.

4. Технические характеристики

Таблица 1. Zitzi Delfi Pro – размер 0

Параметр/размер	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex	Zitzi Delfi Pro Snapper	Zitzi Delfi Pro Pengy	Zitzi Delfi Pro Guppy
Складная/нескладная конструкция	Нескладная	Нескладная	Нескладная	Складная	Нескладная
Высота х Длина х Ширина, см, не более	55 x 66 x 58	55 x 81 x 63	81 x 59 x 53	88 x 106 x 66	92 x 67 x 57
Вес, кг, не более	28	44	29	26	28
Возможность регулировки параметров сиденья:					
Ширина сиденья	Регулируется				
Ширина сиденья, см, не более	24, 27, 30				
Глубина сиденья	Регулируется				
Глубина сиденья, см, мин., макс.	14-20				
Угол наклона сиденья	Регулируется				
Угол наклона сиденья	0 /+30°	0 /+30°	-3° /+22°	-23° /+40°	0 /+32°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не рег-ся	Регулируется
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	54	46/48/50
Абдукция/аддукция	-9/+18°				
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки				
Угол наклона спинки	-12°/+26°				
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	16-23				
Глубина боковой поддержки, см, не более	12,5				

Высота до подмыш. впадин, см, мин., макс.	17-27				
Разница в длине ног (длина ног), см, не более	10				
Рост пользователя, см, мин., макс.	60-80				
Вес пользователя, кг, не более	35	65	50	45	50
Колеса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18 Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	не более 0,35 Н				
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	не менее 150 Н				
Значения параметров ведущих колес:					
Развал	не более 2 градусов				
Схождение	не более 1 градуса				
Концентричность	не более 1% радиуса колеса				
Биение	не более 1% радиуса колеса				
Min. радиус поворота	Не более 500 мм	Не более 550 мм	Не более 450 мм	Не более 550 мм	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 650 мм	Не более 700 мм	Не более 600 мм	Не более 700 мм	Не более 900 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	не более 50 Н				
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	не более 45 Н				
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:					
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	не более 60 Н	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н				
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н				
Хар-ки систем торможения:					
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Стояночный тормоз (педаль)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов				
Параметры тормозных устройств:					
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не более 10 см	Не применимо
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	не более 60 Н				

Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски) (Н, не более)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	80 Н	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья (Н, не более)	23 Н	23 Н	20 Н	Не применимо	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки (Н, не более)	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н	13 Н

Таблица 2. Zitzi Delfi Pro – размер 1

Параметр/размер	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex	Zitzi Delfi Pro Snapper	Zitzi Delfi Pro Pengy	Zitzi Delfi Pro Guppy
Складная/нескладная конструкция	нескладная	нескладная	нескладная	складная	нескладная
Высота х Длина х Ширина, см, не более	65х 74х58	65 х 81 х 63	84 х 59 х 53	96 х 106 х 66	96 х 67 х 57
Вес , кг, не более	28,5	44,5	29,5	26,5	28,8
Возможность регулировки параметров сиденья:					
Ширина сиденья	Регулируется				
Ширина сиденья, см, не более	26, 29, 32				
Глубина сиденья	Регулируется				
Глубина сиденья, см, мин., макс.	17-26				
Угол наклона сиденья	Регулируется				
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	-23° /+40°	0/+32°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не регулируется	3 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	54	46/48/50
Абдукция/аддукция	-9/+18°				
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки				
Угол наклона спинки	-12°/+26°				
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	16-26				
Глубина боковой поддержки, см, не более	12,5				
Высота до подмыш. впадин, см, мин., макс.	17-27				
Разница в длине ног (длина ног), см, не более	10				
Рост пользователя, см, мин., макс.	70-100				
Вес пользователя, кг, не более	35	65	50	45	55
Колеса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	не более 0,35 Н				

Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	не менее 150 Н				
Значения параметров ведущих колес:					
Развал	не более 2 градусов				
Схождение	не более 1 градуса				
Концентричность	не более 1% радиуса колеса				
Биение	не более 1% радиуса колеса				
Min. радиус поворота	Не более 500 мм	Не более 550 мм	Не более 450 мм	Не более 550	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 650 мм	Не более 700 мм	Не более 600 мм	Не более 700 мм	Не более 900 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н				
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н				
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:					
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	не более 60 Н	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н				
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н				
Хар-ки систем торможения:					
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Стояночный тормоз (педаль)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов				
Параметры тормозных устройств:					
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не более 10 см	Не применимо
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н				
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски) (Н, не более)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	80 Н	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья (Н, не более)	23 Н	23 Н	20 Н	Не применимо	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки (Н, не более)	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н	13 Н

Таблица 3. Zitzi Delfi Pro – размер 2

Параметр/размер	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex	Zitzi Delfi Pro Snapper	Zitzi Delfi Pro Pengy	Zitzi Delfi Pro Guppy
Складная/нескладная конструкция	нескладная	нескладная	нескладная	складная	нескладная
Высота х Длина х Ширина, см, не более	75x 74x58	75 x 81 x 63	87 x 59 x 53	100 x 106 x 66	100 x 67 x 57
Вес , кг, не более	29	45	30	27	29
Возможность регулировки параметров сиденья:					
Ширина сиденья	Регулируется, 3 положения				
Ширина сиденья, см, не более	28, 31, 34				
Глубина сиденья	Регулируется				
Глубина сиденья, см, мин., макс.	24-34				
Угол наклона сиденья	Регулируется				
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	-23° /+40°	0/+32°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не регулируется	3 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	54	46/48/50
Абдукция/аддукция	-9/+18°				
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки				
Угол наклона спинки	-12°/+26°				
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	19-28				
Глубина боковой поддержки, см, не более	15				
Высота до подмыш. впадин, см, мин., макс.	24-34				
Разница в длине ног, см, не более	10				
Рост пользователя, см, мин., макс.	90-130				
Вес пользователя, кг, не более	75	75	75	50	65
Колеса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н				
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н				
Значения параметров ведущих колес:					
Развал	не более 2 градусов				
Схождение	не более 1 градуса				
Концентричность	не более 1% радиуса колеса				
Биение	не более 1% радиуса колеса				
Min. радиус поворота	Не более 500 мм	Не более 550 мм	Не более 450 мм	Не более 550	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 650 мм	Не более 700 мм	Не более 600 мм	Не более 700 мм	Не более 900 мм
Усилия, необходимые для	Не более 50 Н				

трогания с места					
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н				
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:					
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	не более 60 Н	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н				
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н				
Хар-ки систем торможения:					
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Стояночный тормоз (педаль)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов				
Параметры тормозных устройств:					
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не более 10 см	Не применимо
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н				
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски) (Н, не более)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	80 Н	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья (Н, не более)	23 Н	23 Н	20 Н	Не применимо	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки (Н, не более)	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н	13 Н

Таблица 4. Zitzi Delfi Pro – размер 3

Параметр/размер	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex	Zitzi Delfi Pro Snapper	Zitzi Delfi Pro Guppy	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro
Складная/нескладная конструкция	нескладная	нескладная	нескладная	нескладная	нескладная
Высота x Длина x Ширина, см, не более	85x 84x58	85 x 81 x 63	91 x 59 x 53	110 x 67 x 57	135 x 77 x 60
Вес, кг, не более	29,5	45,5	30,5	26,5	31,5
Возможность регулировки параметров сиденья:					
Ширина сиденья	Регулируется, 3 положения				

Ширина сиденья, см, не более	30, 33, 36				
Глубина сиденья	Регулируется				
Глубина сиденья, см, мин., макс.	30-40				
Угол наклона сиденья	Регулируется				
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	0/+32°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Регулируется, 3 положения	Регулируется, 2 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	46/48/50	41/46
Абдукция/аддукция	-9/+18°				
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки				
Угол наклона спинки	-12°/+26°				
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	22-31				
Глубина боковой поддержки, см, не более	17,5				
Высота до подмыш. впадин, см, мин., макс.	30-40				
Разница в длине ног, см, не более	10				
Рост пользователя, см, мин., макс.	120-160				
Вес пользователя, кг, не более	75	75	75	70	90
Колеса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60	Передние 15; 18. Задние 30; 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н				
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н				
Значения параметров ведущих колес:					
Развал	не более 2 градусов				
Схождение	не более 1 градуса				
Концентричность	не более 1% радиуса колеса				
Биение	не более 1% радиуса колеса				
Min. радиус поворота	Не более 600 мм	Не более 650 мм	Не более 550 мм	Не более 650 мм	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 750 мм	Не более 800 мм	Не более 700 мм	Не более 800 мм	Не более 1000 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н				
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н				
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:					
Для складывания/раскладывания	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо

кресла-коляски					
Для закрепления спинки	не более 80 Н				
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н				
Хар-ки систем торможения:					
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов				
Параметры тормозных устройств:					
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не применимо	Не применимо
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н				
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски) (Н, не более)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	Антипрокидыватель	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья (Н, не более)	23 Н	23 Н	20 Н	24 Н	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки (Н, не более)	15 Н	15 Н	13 Н	13 Н	13 Н

Таблица 5. Zitzi Delfi Pro – размер 4

Параметр/размер	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro	Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex	Zitzi Delfi Pro Snapper	Zitzi Delfi Pro Guppy	Zitzi Delfi Pro Seabass Pro
Складная/нескладная конструкция	нескладная	нескладная	нескладная	нескладная	нескладная
Высота х Длина х Ширина, см, не более	94x 84x58	94 x 81 x 63	96 x 59 x 53	120 x 67 x 57	146 x 77 x 60
Вес, кг, не более	30	46	31	27	35
Возможность регулировки параметров сиденья:					
Ширина сиденья	Регулируется, 3 положения				
Ширина сиденья, см, не более	32, 35, 38				
Глубина сиденья	Регулируется				
Глубина сиденья, см, мин., макс.	37-45				
Угол наклона сиденья	Регулируется				
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	0/+32°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Регулируется, 3 положения	Регулируется, 2 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	46/48/50	41/46

Абдукция/аддукция	-9/+18°				
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки				
Угол наклона спинки	-12°/+26°				
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	22-31				
Глубина боковой поддержки, см, не более	17,5				
Высота до подмыш. впадин, см, мин., макс.	37-45				
Разница в длине ног, см, не более	10				
Рост пользователя, см, мин., макс.	140-170				
Вес пользователя, кг, не более	75	75	75	70	90
Колеса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60	Передние 15; 18. Задние 30; 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н				
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н				
Значения параметров ведущих колес:					
Развал	не более 2 градусов				
Схождение	не более 1 градуса				
Концентричность	не более 1% радиуса колеса				
Биение	не более 1% радиуса колеса				
Min. радиус поворота	Не более 600 мм	Не более 650 мм	Не более 550 мм	Не более 650 мм	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 750 мм	Не более 800 мм	Не более 700 мм	Не более 800 мм	Не более 1000 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н				
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н				
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:					
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н				
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н				
Хар-ки систем торможения:					
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Барабанный тормоз, стояночный	Барабанный тормоз, стояночный

		ручке для толкания)		тормоз (рычаг)	тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов				
Параметры тормозных устройств:					
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не применимо	Не применимо
Усилие при торможении к рукоятке стояночного	Не более 60 Н				
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски) (Н, не более)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	Антипрокидыватель	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья (Н, не более)	23 Н	23 Н	20 Н	24 Н	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки (Н, не более)	15 Н	15 Н	13 Н	13 Н	13 Н

Таблица 6. Zitzy Pengy

	Zitzi Pengy Flipper Pro	Zitzi Pengy Flipper Pro Flex	Zitzi Pengy Snapper	Zitzi Pengy Pengy
Складная/нескладная конструкция	нескладная	нескладная	нескладная	складная
Высота х Длина х Ширина, см, не более	110 х 84 х 58	115 х 81 х 63	112 х 59 х 53	100 х 106 х 66
Вес, кг, не более	25	38	23	19
Возможность регулировки параметров сиденья:				
Ширина сиденья	Не регулируется			
Ширина сиденья, см, не более	34			
Глубина сиденья	Регулируется			
Глубина сиденья, мин., макс.	28-38			
Угол наклона сиденья	Регулируется			
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3°/+22°	-23°/+40°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не регулируется
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	54
Абдукция/аддукция	-9/+18°			
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки			
Угол наклона спинки	-10/+30°			
Ширина боковой поддержки, мин., макс.	19 - 28			
Глубина боковой поддержки, см, мин, макс.	19 - 28			
Высота до подмышечных	20-35			

впадин, см, не более				
Разница в длине ног, см, не более	10			
Рост пользователя, см, мин., макс.	90-140			
Вес пользователя, кг, не более	45	45	45	45
Колеса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н			
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н			
Значения параметров ведущих колес:				
Развал	не более 2 градусов			
Схождение	не более 1 градуса			
Концентричность	не более 1% радиуса колеса			
Биение	не более 1% радиуса колеса			
Min. радиус поворота	Не более 500 мм	Не более 550 мм	Не более 450 мм	Не более 550
Min. ширина разворота	Не более 650 мм	Не более 700 мм	Не более 600 мм	Не более 700 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н			
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н			
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:				
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не более 60 Н
Для закрепления спинки	не более 80 Н			
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н			
Хар-ки систем торможения:				
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Стояночный тормоз (педаль)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов			
Параметры тормозных устройств:				
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо.	Не более 10 см	Не более 10 см
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н			
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие,	95 Н	Антипрокидыват ель	80 Н	80 Н

необходимое для удерживания коляски)				
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	Не предусмотрено.
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н

Таблица 7. Zitzy Sharky Pro (размеры 1, 2)

	Zitzy Sharky Pro Flipper Pro	Zitzy Sharky Pro Flipper Pro Flex	Zitzy Sharky Pro Snapper	Zitzy Sharky Pro Seabass Pro
Размеры	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Складная/нескладная конструкция	нескладная	нескладная	нескладная	нескладная
Высота х Длина х Ширина, см, не более	88-137 х 84 х 58	96-142 х 84 х 63	114-139 х 59 х 53	113-123 х 77 х 60
Вес, кг, не более	34 / 35	46 / 47	31 / 32	36 / 37
Возможность регулировки параметров сиденья:				
Ширина сиденья	Регулируется, 3 положения			
Ширина сиденья, см, не более	36, 39, 42 / 43, 46, 49			
Глубина сиденья	Регулируется			
Глубина сиденья, см, мин., макс.	37-47 / 45-55			
Угол наклона сиденья	Регулируется			
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется бесступенчатая регулировка	Регулируется бесступенчатая регулировка	Регулируется бесступенчатая регулировка	Регулируется 2 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	41/46
Абдукция/аддукция	-9/+18°			
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки.			
Угол наклона спинки	-10°/+25°			
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	27-35 / 30-38			
Глубина боковой поддержки, см, не более	21 / 25			
Высота до подмыш. впадин, см, мин. .макс.	35-50 / 40-55			
Разница в длине ног, см, не более	10			
Рост пользователя, см, мин., макс.	150-180 / 170-195			
Вес пользователя, кг, не более	75	65	75	130
Колеса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 15; 18. Задние 30; 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н			
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н			
Значения параметров				

ведущих колес:				
Развал	не более 2 градусов			
Схождение	не более 1 градуса			
Концентричность	не более 1% радиуса колеса			
Биение	не более 1% радиуса колеса			
Min. радиус поворота	Не более 700 мм	Не более 750 мм	Не более 650 мм	Не более 650 мм
Min. ширина разворота	Не более 800 мм	Не более 900 мм	Не более 800 мм	Не более 1100 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 80 Н			
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н			
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:				
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо.
Для закрепления спинки	не более 80 Н			
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н			
Хар-ки систем торможения:				
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов			
Параметры тормозных устройств:				
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо.	Не более 10 см	Не применимо.
Усилия при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н			
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	95Н	Антипрокидыватель	80Н	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	24Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н

Таблица 8. Anatomic Sits – размер 1

Параметр/размер	Anatomic Sits Flipper	Anatomic Sits Flipper	Anatomic Sits Snapper	Anatomic Sits Pengy	Anatomic Sits Guppy	Anatomic Sits Seabass
-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

	Pro	Pro Flex				Pro
Складная/нескладная конструкция	Нескладная	Нескладная	Нескладная	Складная	Нескладная	Нескладная
Высота х Длина х Ширина, см, не более	До 110 х 84 х 58	До 115 х 81 х 63	До 112 х 53 х 59	До 100 х 95 х 66	До 120 х 67 х 57	До 146 х 77 х 60
Вес, кг, не более	29	41	26	22	24	30
Возможность регулировки параметров сиденья:						
Ширина сиденья	Регулируется					
Ширина сиденья, см, мин., макс.	20-30					
Глубина сиденья	Регулируется					
Глубина сиденья, см, мин., макс.	15-20					
Угол наклона сиденья	Регулируется					
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	-23° /+40°	0/+32°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не регулируется	Рег-ся, 3 положения	Рег-ся, 2 положения
Высота сиденья, см, не более	23-61	29-65	46-62	54	46/48/50	41 / 46
Абдукция/аддукция	-10°/ +45°					
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки					
Угол наклона спинки	-10° - +26°					
Ширина грудной клетки, см, мин., макс.	17 - 31					
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	16-26					
Глубина боковой поддержки, см, не более	13					
Высота до подмыш. Впадин, см, мин., макс.	20-27					
Разница в длине ног, см, не более	10					
Рост пользователя, см, мин., макс.	50-100					
Вес пользователя, кг, не более	50	50	50	50	50	70
Колёса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60	Передние 15; 18. Задние 30; 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н					
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н					
Значения параметров ведущих колес						
Развал	не более 2 градусов					
Схождение	не более 1 градуса					
Концентричность	не более 1% радиуса колеса					
Биение	не более 1% радиуса колеса					
Min. радиус поворота	Не более	Не более	Не более	Не более	Не более	Не более

	500 мм	550 мм	450 мм	550	600 мм	600 мм
Min. ширина разворота	Не более 650 мм	Не более 700 мм	Не более 600 мм	Не более 700 мм	Не более 900 мм	Не более 900 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н					
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н					
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:						
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применим о	Не применим о	Не применим о	не более 60 Н	Не применим о	Не применим о
Для закрепления спинки	не более 80 Н					
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н					
Хар-ки систем торможения:						
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Стояночный тормоз (педаль)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов					
Параметры тормозных устройств:						
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применим о	Не более 10 см	Не более 10 см	Не применим о	Не применим о
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н					
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	80 Н	Антипрокидыватель	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	Не предусмотрено.	24 Н	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н	13 Н	13 Н.

Таблица 9. Anatomic Sits – размер 2

Параметр/размер	Anatomic Sits Flipper Pro	Anatomic Sits Flipper Pro Flex	Anatomic Sits Snapper	Anatomic Sits Pengy	Anatomic Sits Guppy	Anatomic Sits Seabass Pro
Складная/нескладная конструкция	Нескладная	Нескладная	Нескладная	Складная	Нескладная	Нескладная
Высота x Длина x Ширина,	До 135 x	До 140 x	До 137 x	До 100 x	До 120 x	До 146 x

см, не более	84 x 58	81 x 63	53 x 59	106 x 66	67 x 57	77 x 60
Вес, кг, не более	34	46	31	27	29	35
Возможность регулировки параметров сиденья:						
Ширина сиденья	Регулируется					
Ширина сиденья, см, мин., макс.	28-45					
Глубина сиденья	Регулируется					
Глубина сиденья, см, мин., макс.	17-45					
Угол наклона сиденья	Регулируется					
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	-23° /+40°	0/+32°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не рег-ся	Рег-ся 3 положения	Рег-ся 2 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	54	46/48/50	41/46
Абдукция/аддукция	-10°/ +45°					
Возможность регулировки параметров спинки	Регулируется угол наклона спинки					
Угол наклона спинки	-10° /+90°					
Ширина грудной клетки, см, мин., макс.	17-31					
Ширина боковой поддержки, см., мин., макс.	19-28					
Глубина боковой поддержки, см, мин., макс.	15-16					
Высота до подмыш. Впадин, см, мин., макс.	24-34					
Разница в длине ног, см, не более	10					
Рост пользователя, см, не более	90-130					
Вес пользователя, кг, не более	75	75	75	50	70	130
Колёса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60	Передние 15; 18. Задние 30; 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н					
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н					
Значения параметров ведущих колес						
Развал	не более 2 градусов					
Схождение	не более 1 градуса					
Концентричность	не более 1% радиуса колеса					
Биение	не более 1% радиуса колеса					
Min. радиус поворота	Не более 500 мм	Не более 550 мм	Не более 450 мм	Не более 550	Не более 600 мм	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более	Не более	Не более	Не более	Не более	Не более

	650 мм	700 мм	600 мм	700 мм	1000 мм	1000 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н					
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н					
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:						
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	не более 60 Н	Не применимо	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н					
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н					
Хар-ки систем торможения:						
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Стояночный тормоз (педаль)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов					
Параметры тормозных устройств:						
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не более 10 см	Не применимо	Не применимо
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н					
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	80 Н	Антипрокидыватель	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	Не предусмотрено.	24 Н	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н	13 Н	13 Н.

Таблица 10. Anatomic Sits – размер 3

Параметр/размер	Anatomic Sits Flipper Pro	Anatomic Sits Flipper Pro Flex	Anatomic Sits Snapper	Anatomic Sits Seabass Pro
Складная/нескладная конструкция	Нескладная	Нескладная	Нескладная	Нескладная
Высота х Длина х Ширина, см, не более	До 185 х 84 х 58	До 190 х 81 х 63	До 187 х 53 х 59	До 146 х 77 х 60
Вес, кг, не более	44	56	41	45
Возможность регулировки параметров сиденья:				

Ширина сиденья	Регулируется			
Ширина сиденья, см, мин., макс.	45-65			
Глубина сиденья	Регулируется			
Глубина сиденья, см, мин., макс.	40-70			
Угол наклона сиденья	Регулируется			
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Рег-ся, 2 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	41/46
Абдукция/аддукция	-10° / +45°			
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки			
Угол наклона спинки	-10° / +90°			
Ширина грудной клетки, см, мин., макс.	17-31			
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	22-31			
Глубина боковой поддержки, см., мин., макс.	17-18			
Высота до подмыш. Впадин, см, мин., макс.	30-45			
Разница в длине ног, см, не более	10			
Рост пользователя, см, мин., макс.	120-200			
Вес пользователя, кг, не более	75	75	75	135
Колёса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 15; 18. Задние 30; 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н			
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н			
Значения параметров ведущих колес:				
Развал	не более 2 градусов			
Схождение	не более 1 градуса			
Концентричность	не более 1% радиуса колеса			
Биение	не более 1% радиуса колеса			
Min. радиус поворота	Не более 700 мм	Не более 750 мм	Не более 650 мм	Не более 650 мм
Min. ширина разворота	Не более 800 мм	Не более 900 мм	Не более 800 мм	Не более 1100 мм
Усилия, необходимые для	Не более 80 Н			

трогания с места				
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н			
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:				
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо.
Для закрепления спинки	не более 80 Н			
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н			
Хар-ки систем торможения:				
Тип системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов			
Параметры тормозных устройств:				
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо.	Не более 10 см	Не применимо.
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н			
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	95Н	Антипрокидыватель	80Н	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	24Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н

Таблица 11. Anatomic Soft Sits – размер 1

Параметр/размер	Anatomic Soft Sits Flipper Pro	Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex	Anatomic Soft Sits Snapper	Anatomic Soft Sits Pengy	Anatomic Soft Sits Guppy	Anatomic Soft Sits Seabass Pro
Складная/нескладная конструкция	Нескладная	Нескладная	Нескладная	Складная	Нескладная	Нескладная
Высота x Длина x Ширина, см, не более	До 110 x 84 x 58	До 115 x 81 x 63	До 112 x 53 x 59	До 100 x 95 x 66	До 120 x 67 x 57	До 146 x 7 x 60
Вес, кг, не более	29	41	26	22	24	30

Возможность регулировки параметров сиденья:						
Ширина сиденья	Регулируется					
Ширина сиденья, см, мин., макс.	20-30					
Глубина сиденья	Регулируется					
Глубина сиденья, см, мин., макс.	15-20					
Угол наклона сиденья	Регулируется					
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	-23° / +40°	0/+32°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не регулируется	Рег-ся, 3 положения	Рег-ся, 2 положения
Высота сиденья, см, не более	23-61	29-65	46-62	54	46/48/50	41 / 46
Абдукция/аддукция	-10° / +45°					
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки					
Угол наклона спинки	-10° - +26°					
Ширина грудной клетки, см, мин., макс.	17 - 31					
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	16-26					
Глубина боковой поддержки, см, не более	13					
Высота до подмыш. Впадин, см, мин., макс.	20-27					
Разница в длине ног, см, не более	10					
Рост пользователя, см, мин., макс.	50-100					
Вес пользователя, кг, не более	50	50	50	50	50	70
Колёса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60	Передние 15; 18. Задние 30 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н					
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н					
Значения параметров ведущих колес						
Развал	не более 2 градусов					
Схождение	не более 1 градуса					
Концентричность	не более 1% радиуса колеса					
Биение	не более 1% радиуса колеса					
Min. радиус поворота	Не более 500 мм	Не более 550 мм	Не более 450 мм	Не более 550	Не более 600 мм	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 650 мм	Не более 700 мм	Не более 600 мм	Не более 700 мм	Не более 900 мм	Не более 900 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н					
Усилия, необходимые для перемещения в заданном	Не более 45 Н					

направлении						
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:						
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применим о	Не применимо	Не применим о	не более 60 Н	Не применим о	Не применим
Для закрепления спинки	не более 80 Н					
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н					
Хар-ки систем торможения:						
Вид системы торможения	Стояночн ый тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночны й тормоз (дужка на колесе)	Стояночны й тормоз (педаль)	Барабанны й тормоз, стояночны й тормоз (рычаг)	Барабанны й тормоз, стояночны й тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов					
Параметры тормозных устройств:						
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не более 10 см	Не применим о	Не применим о
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н					
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	95 Н	Антипроки дыватель	80 Н	80 Н	Антипрок идыватель	Антипрок идыватели
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	Не предусмот рено.	24 Н	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н	13 Н	13 Н.

Таблица 12. Anatomic Soft Sits – размер 2

Параметр/размер	Anatomic Soft Sits Flipper Pro	Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex	Anatomic Soft Sits Snapper	Anatomic Soft Sits Pengy	Anatomic Soft Sits Guppy	Anatomic Soft Sits Seabass Pro
Складная/нескладная конструкция	Нескладная	Нескладная	Нескладная	Складная	Нескладная	Нескладная
Высота x Длина x Ширина, см, не более	До 135 x 84 x 58	До 140 x 81 x 63	До 137 x 53 x 59	До 100 x 106 x 66	До 120 x 67 x 57	До 146 x 7 x 60
Вес, кг, не более	34	46	31	27	29	35
Возможность регулировки параметров сиденья:						
Ширина сиденья	Регулируется					
Ширина сиденья, см, мин.,	28-45					

макс.						
Глубина сиденья	Регулируется					
Глубина сиденья, см, мин., макс.	17-45					
Угол наклона сиденья	Регулируется					
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	-23° /+40°	0/+32°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Не рег-ся	Рег-ся 3 положения	Рег-ся 2 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	54	46/48/50	41/46
Абдукция/аддукция	-10° / +45°					
Возможность регулировки параметров спинки	Регулируется угол наклона спинки					
Угол наклона спинки	-10° /+90°					
Ширина грудной клетки, см, мин., макс.	17-31					
Ширина боковой поддержки, см., мин., макс.	19-28					
Глубина боковой поддержки, см, мин., макс.	15-16					
Высота до подмыш. Впадин, см, мин., макс.	24-34					
Разница в длине ног, см, не более	10					
Рост пользователя, см, не более	90-130					
Вес пользователя, кг, не более	75	75	75	50	70	130
Колёса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 20; 30 Задние 30	Передние 15; 18. Задние 40; 50; 55; 60	Передние 15; 18. Задние 30 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н					
Усилия вращения колес в заторможенном состоянии	Не менее 150 Н					
Значения параметров ведущих колес						
Развал	не более 2 градусов					
Схождение	не более 1 градуса					
Концентричность	не более 1% радиуса колеса					
Биение	не более 1% радиуса колеса					
Min. радиус поворота	Не более 500 мм	Не более 550 мм	Не более 450 мм	Не более 550	Не более 600 мм	Не более 600 мм
Min. ширина разворота	Не более 650 мм	Не более 700 мм	Не более 600 мм	Не более 700 мм	Не более 900 мм	Не более 900 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н					
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н					

Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:						
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	не более 60 Н	Не применимо	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н					
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н					
Хар-ки систем торможения:						
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Стояночный тормоз (педаль)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов					
Параметры тормозных устройств:						
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо	Не более 10 см	Не более 10 см	Не применимо	Не применимо
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н					
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	95 Н	Антипрокидыватель	80 Н	80 Н	Антипрокидыватель	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	Не предусмотрено.	24 Н	24 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н	13 Н	13 Н.

Таблица 13. Anatomic Soft Sits – размер 3

Параметр/размер	Anatomic Soft Sits Flipper Pro	Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex	Anatomic Soft Sits Snapper	Anatomic Soft Sits Seabass Pro
Складная/нескладная конструкция	Нескладная	Нескладная	Нескладная	Нескладная
Высота x Длина x Ширина, см, не более	До 185 x 84 x 58	До 190 x 81 x 63	До 187 x 53 x 59	До 146 x 77 x 60
Вес, кг, не более	44	56	41	45
Возможность регулировки параметров сиденья:				
Ширина сиденья	Регулируется			
Ширина сиденья, см, мин., макс.	45-65			
Глубина сиденья	Регулируется			

Глубина сиденья, см, мин., макс.	40-70			
Угол наклона сиденья	Регулируется			
Угол наклона сиденья	0/+30°	0/+30°	-3° / +22°	0/+35°
Высота сиденья	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Рег-ся, 2 положения
Высота сиденья, см, мин., макс.	23-61	29-65	46-62	41/46
Абдукция/аддукция	-10°/ +45°			
Возможность регулировки параметров спинки:	Регулируется угол наклона спинки			
Угол наклона спинки	-10° / +90°			
Ширина грудной клетки, см, мин., макс.	17-31			
Ширина боковой поддержки, см, мин., макс.	22-31			
Глубина боковой поддержки, см., мин., макс.	17-18			
Высота до подмыш. Впадин, см, мин., макс.	30-45			
Разница в длине ног, см, не более	10			
Рост пользователя, см, мин., макс.	120-200			
Вес пользователя, кг, не более	75	75	75	135
Колёса, диаметр, см, не более	12,5	Передние 18. Задние 30; 40	10	Передние 15; 18. Задние 30; 40; 50; 55; 60
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н			
Усилия вращения колес в торможённом состоянии	Не менее 150 Н			
Значения параметров ведущих колес:				
Развал	не более 2 градусов			
Схождение	не более 1 градуса			
Концентричность	не более 1% радиуса колеса			
Биение	не более 1% радиуса колеса			
Min. радиус поворота	Не более 700 мм	Не более 750 мм	Не более 650 мм	Не более 650 мм
Min. ширина разворота	Не более 800 мм	Не более 900 мм	Не более 800 мм	Не более 1100 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 80 Н			
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	Не более 45 Н			
Значения усилий,				

необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:				
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо	Не применимо	Не применимо	Не применимо.
Для закрепления спинки	не более 80 Н			
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н			
Хар-ки систем торможения:				
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)	Стояночный тормоз (рычаг на ручке для толкания)	Стояночный тормоз (дужка на колесе)	Барабанный тормоз, стояночный тормоз (рычаг)
Требования статической устойчивости к системам торможения	удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов			
Параметры тормозных устройств:				
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см	Не применимо.	Не более 10 см	Не применимо.
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н			
Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	95Н	Антипрокидыватель	80Н	Антипрокидыватель
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	23 Н	23 Н	20 Н	24Н
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	15 Н	15 Н	13 Н	15 Н

Таблица 14. Carseat Pro

Параметр/размер	Carseat Pro (с рамой Pengy) Размеры 1/2
Складная/нескладная конструкция	Складная
Высота х Длина х Ширина, см, не более	107х95х66 / 130х106х66
Возможность регулировки параметров сиденья:	
Ширина сиденья	Не регулируется
Ширина сиденья, см, не более	34
Глубина сиденья	Регулируется
Глубина сиденья, см, мин., макс.	27-36 / 32-41
Угол наклона сиденья	Регулируется
Угол наклона сиденья	-23° / +40°
Высота сиденья	Не регулируется
Высота сиденья, см, не более	54
Абдукция/аддукция	-9/+18°
Возможность регулировки	

параметров спинки:	
Угол наклона спинки	Не регулируется
Ширина грудной клетки, см, мин., макс.	14-24 / 16-26
Глубина боковой поддержки, см, не более	12 / 13
Высота до подмыш. Впадин, см, мин., макс.	22-29 / 26-33
Разница в длине ног (длина ног), см, не более	10
Рост пользователя, см, мин., макс.	90-135 / 115-155
Вес пользователя, кг, мин., макс.	15-25 / 15-36
Вес, кг, не более	19 / 21
Колёса, диаметр, см, не более	Передние 20; 30 Задние 30
Усилия вращения колес при горизонтальном движении	Не более 0.35 Н
Усилия вращения колес в зафиксированном состоянии	Не менее 150 Н
Значения параметров ведущих колес:	
Развал	не более 2 градусов
Схождение	не более 1 градуса
Концентричность	не более 1% радиуса колеса
Биение	не более 1% радиуса колеса
Min. радиус поворота	Не более 550 мм
Min. ширина разворота	Не более 700 мм
Усилия, необходимые для трогания с места	Не более 50 Н
Усилия, необходимые для перемещения в заданном направлении	не более 45 Н
Значения усилий, необходимых для фиксации в определенных положениях кресел-колясок и их элементов:	
Для складывания/раскладывания кресла-коляски	Не применимо
Для закрепления спинки	не более 80 Н
Для регулирования длины и угла наклона подножки	не более 100 Н
Хар-ки систем торможения:	
Вид системы торможения	Стояночный тормоз (педаль)
Требования статической устойчивости к системам торможения	Удерживает на плоскости с уклоном в 10 градусов
Параметры тормозных устройств:	
Высота от пола педали тормоза	Не более 10 см
Усилие при торможении к рукоятке стояночного тормоза	Не более 60 Н

Характеристики устойчивости коляски (макс. усилие, необходимое для удерживания коляски)	Не более 80 Н
Значения усилий, необходимых для регулировки высоты сиденья	Не предусмотрено.
Значения усилий, необходимых для регулировки наклона спинки	Не предусмотрено.

Таблица 15. Газовая пружина. Технические характеристики

	Газовая пружина, 185 мм /200 Н	Газовая пружина, 205 мм/300 Н	Газовая пружина, 185 мм /500 Н	Газовая пружина, 365 мм /200 Н	Газовая пружина, 380 мм/ 800 Н	Газовая пружина, 380 мм /1200 Н
Назначение	Для регулировки параметров спинки	Для регулировки параметров спинки	Для регулировки параметров спинки	Для регулировки параметров сиденья	Для регулировки параметров сиденья	Для регулировки параметров сиденья
Длина, мм, не более	185 мм	205 мм	185 мм	365 мм	380 мм	380 мм
Сила, Н, не более	200 Н	300 Н	500 Н	200 Н	800 Н	1200 Н
Масса, кг, не более	1 кг	1 кг	1 кг	1 кг	1 кг	1 кг

Таблица 16. Прочностные характеристики принадлежностей, предназначенных для фиксации пациента

	Материал	Растяжимость, мм, не более (на нагрузке 2000 Н)	Усилие на разрыв во влажном состоянии (кН, не менее)	Усилие на разрыв в сухом состоянии (кН, не менее)
Активная повязка для лба Zitzi	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Активная повязка для лба Junior, Pro Serie	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Активная повязка для лба Adult, Pro Serie	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Грудной ремень Х-образный Pro	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Грудной ремень Х-образный Exclusive	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Грудной ремень Н-образный Pro	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Грудной ремень Н-образный Exclusive	Нейлон -	10	15	13

	Exclusive board lamin Black Skai			
Грудной ремень Zitzi Delfi Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Грудной ремень Soft Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Бедренный ремень Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Бедренный ремень Comfort Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Бедренный ремень Exclusive	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Бедренный антиротационный ремень	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Фиксатор голеностопа Exclusive	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Фиксатор голеностопа Soft	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Фиксатор голеностопа Pro	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Ремни для ног	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Ремень для ступней	Нейлон - PP Nylon	7	12	10
Браслет Soft	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai	10	15	13
Браслет	Нейлон - PP Nylon	7	12	10

Таблица 17. Прочностные характеристики мест соединения принадлежностей и кресел-колясок, имеющих непосредственное отношение к пользователю

	Усилие на отрыв крепежных соединений, кН, не менее
Поддержка таза	18
Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro	10
Боковая поддержка фиксированная Zitzi Sharky Pro	10
Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro	10
Боковая поддержка откидная Zitzi Sharky Pro	10
Усиленная основа боковой поддержки Zitzi Sharky Pro	15
Подголовники	
Подголовник Pengy	10
Подголовник Zitzi Sharky Pro Standard	10
Подголовник Pengy удлиненный	12
Подголовник Pro Standard	10
Подголовник Pro Standard удлиненный	12
Подголовник Pro Mini	10
Подголовник Pro Serie Adult	10
Подголовник Pro Serie Adult	10
Подголовник Pro Junior	10
Подголовник Pro Junior Anatomic sits	10
Подголовник Pro Single adult, junior	10
Подголовник Pro Plush	10
Подголовник Pro Plush регулируемый	10
Подголовник Black Bear	10
Подголовник LINX Plush регулируемый	10
Подголовник Carseat	10
Подголовник Carseat удлинённый	12
Подлокотники	
Подлокотник	10
Подлокотник Guppy	10
Подлокотник Zitzi Sharky Pro	10
Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный	10
Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной	10
Опора для предплечья	10
Подлокотная опора	10
Подножки	
Подножка Carseat Pro	14
Единая подножка Zitzi Delfi Pro	14

Единая подножка Pengy	14
Единая подножка Seabass Pro	14
Платформа для ног	14
Регулируемая единая подножка	14
Откидная единая подножка	14
Откидная единая подножка Seabass Pro	14
Раздельные подножки	10
Раздельные подножки Seabass Pro	10
Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro Регулируемые раздельные подножки	10
Откидные раздельные подножки	10
Откидные регулируемые подножки	10
Высокие бортики для подножек	8
Высокие бортики для раздельных подножек	8
Подножка МН	10
Опоры	
Опора для икр, с одним держателем	10
Опора для икр, с двумя держателями	10
Опора для икр Pengy	10
Опора для стопы, правая / левая	12
Пластиковая часть опоры бедра усиленная, правая и левая	8
Пластиковая часть опоры бедра, правая и левая	8
Пластиковая часть опоры бедра, медиально/латерально +4см	8
Опора бедра, медиально/латерально +4 см	8

Таблица 18. Принадлежности, технические характеристики

Название	Размеры (не более) Масса (не более)
1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro	Д х Ш х В, масса Размер 1: 12,5 х 8.5 х 17-26 см, 1.2 кг Размер 2, 15х 9.5 х 19-28 см, 1.5, кг
	Д х Ш х В, масса Размер 3: 17,5 х 11х 22-31 см, 1.8 кг
3. Боковая поддержка фиксированная Zitzi Sharky Pro	Д х В, масса Размер 1: 27-35 х 21 см Размер 2: 30-38 х 25 см
4. Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro	Д х В, масса Размер 1, 17-26 см/12,5 см, 1.2 кг Размер 2, 19-28 см/15 см, 1.5, кг Размер 3, 22-31 см/17,5 см, 1.8 кг
5. Боковая поддержка откидная Zitzi Sharky Pro	Д х В, масса Размер 1 - 27-35 см/21 см, 2 кг Размер 2, 30-38 см/ 25 см, 2.1 кг
6. Усиленная основа боковой поддержки Zitzi Sharky Pro	Д х Ш х В, масса Размер 1: 12 х 5 х 12 см, 150 г Размер 2: 12, 5 х 8 х 19 см, 200 г
7. Крепеж боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, складной	Д х Ш х В, масса 10 х 5 х 10 см, 150 г
8. Подголовник Pengy	Д х В, масса Размер 1: 22 х 15 см, 200 г Размер 2: 24 х 19 см, 210 г
9. Подголовник Zitzi Sharky Pro Standard	Д х В, масса Размер 1 удлинённый: 28х16 см, 220 г Размер 2: 24х19 см, 200 г Размер 2 удлинённый: 28х21 см, 230 г
10. Подголовник Pengy удлинённый	Д х В, масса Размер 1: 25 х 16 см, 220 г Размер 2: 27 х 21 см, 230 г
11. Подголовник Pro Standard	Д х В, масса Размер 1: 22 х 15 см, 1 кг Размер 2: 24 х19 см, 1.2 кг
12. Подголовник Pro Standard удлинённый,	Д х В, масса Размер 1: 28 х 16 см, 1.4 кг Размер 2: 28 х 21 см, 1.5 кг
13. Подголовник Pro Mini	Д х В, масса Размер 1: 22 х 14 см, 1.2 кг Размер 2: 25,5 х 16 см, 1.3 кг Размер 3: 33 х 19 см 1.4 кг
14. Подголовник Pro	В х Д, масса

Serie Adult	24 x 37 см, 1.5 кг
15. Подголовник Pro Serie Adult	В x Д, масса 26 x 32 см, 1.4 кг
16. Подголовник Pro Junior	В x Д, масса 27 x 35 см, 1.2 кг
17. Подголовник Pro Junior Anatomic sits	В x Д, масса 29 x 37 см, 1.4 кг
18. Подголовник Pro Single adult, junior	В x Д, масса Взрослый размер: 30 x 37 см, 1.3 кг Детский размер: 24 37 см, 1.2 кг
19. Подголовник Pro Plush	Длина, масса Размер 1: длина 20 см, 1.2 кг Размер 2: длина 25 см, 1.3 кг Размер 3: длина 35 см, 1.4 кг Размер 4: длина 40 см, 1.5 кг
20. Подголовник Pro Plush регулируемый	Д, В, масса Размеры: 21. Низкий: 15-35см, 1.2 кг 22. Стандартный: 20-45, 1.5 кг
23. Подголовник Black Bear	Д x В, масса размеры: 1.Стандартный: 27 x 26 см, 1.2 кг 2.Удлиненный: 29 x 26 см, 1.25 кг
24. Подголовник LINX Plush	В, масса Размеры: 1: 20 см, 1.2 кг 2: 25 см, 1.3 кг 3: 35 см, 1.4 кг 4. 40 см, 1.5 кг
25. Подголовник LINX Plush регулируемый	В, масса Размеры: 1.Низкий: 15-35см, 1.2 кг 2.Стандартный: 20-45, 1.5 кг
26. Подголовник Carseat	В x Д, масса 24 x 43 см, 1,3 кг
27. Подголовник Carseat удлинённый	В x Д, масса 24x37 см, 1,2 кг
28. Регулируемое крепление подголовника	В x Д, масса 10 x 5 x 3 см, 0.5 кг
29. Активная повязка для лба Zitzi	В x Д x Ш, масса 2 x 10 x 1 см, 0.2 кг
30. Активная повязка для лба Junior, Pro Serie	Д x В x Ш, масса 20 x 5 x 1 см, 0.1 кг
31. Активная повязка для лба Adult, Pro Serie	Д x В x Ш, масса 20 x 5 x 3 см, 0.4 кг
32. Крепежный кронштейн для активной повязки для лба	В x Д x Ш, масса 5 x 10 x 1 см, 0.3 кг

33. Крепление для подголовника	В х Д х Ш, масса 6 х 6 х 1 см, 0.2 кг
34. Крепление для подголовника Anatomic sits	Д х Ш х В, масса 5 х 5 х 5 см, 0.3 кг
35. Верхний крепежный кронштейн, удлиненный	Д х В х Ш, масса 12 х 5 х 0.5, 0.2 кг
36. Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro	В х Д х Ш, масса 4 х 5 х 0.5, 0.2 кг
37. Нижний крепежный кронштейн	В х Д х Ш, масса 4 х 5 х 0.5, 0.2 кг
38. Грудной ремень Х-образный Pro	Ш х Д, масса Размер 1 (XS): 20х26 см, 200 г Размер 2 (S): 21х31 см, 200 г Размер 3(М): 25х37 см, 200 г Размер 4 (L): 33х50 см, 200 г
39. Грудной ремень Х-образный Exclusive	Ш х Д, масса Размер 1 (XS): 20х26 см, 200 г Размер 2 (S): 21х31 см, 200 г Размер 3(М): 25х37 см, 200 г Размер 4 (L): 33х50 см, 200 г
40. Грудной ремень Н-образный Pro	Размер одной половины – Ш х Д, масса: Размер 1 (XS): 8,5х19,5 см, 200 г Размер 2 (S): 10х31,5 см, 200 г Размер 3 (М): 11,5х39,5 см, 200 г Размер 4 (L): 11,5х46 см, 200 г
41. Грудной ремень Н-образный Exclusive	Размер одной половины – Ш х Д, масса: Размер 1 (XS): 8,5х19,5 см, 200 г Размер 2 (S): 10х31,5 см, 200 г Размер 3 (М): 11,5х39,5 см, 200 г Размер 4 (L): 11,5х46 см, 200 г
42. Грудной ремень Zitzi Delfi Pro	Д х В х Ш, масса 30 х 6 х 1 см, 200 г
43. Грудной ремень Soft Pro	Д х В х Ш, масса Размер 1 (детский): 20 х 6 х 1, 200 г Размер 2 (взрослый): 40 х 6 х 1, 250 г
44. Бедренный ремень Pro	Д х Ш, масса Размер 1 (XS): 25 х 6 см, 200 г Размер 2 (S): 30 х 6 см, 200 г Размер 3 (М): 35 х 6 см, 200 г Размер 4 (L): 40 х 6 см, 200 г
45. Бедренный ремень Comfort Pro	Д х Ш, масса Размер 1(S): 30х6 см, 250 г Размер 2 (М): 35х6 см, 200 г Размер 3 (L): 40х6 см, 200 г

46. Бедренный ремень Exclusive	Д х Ш, масса Размер 1(S): 30х6 см, 200 г Размер 2 (M): 35х6 см, 200 г
47. Бедренный антиротационный ремень	Д х Ш, масса Размер 1 (XS): 25 х 6 см, 200 г Размер 2 (S): 30 х 6 см, 200 г Размер 3 (M): 35 х 6 см, 200 г Размер 4 (L): 40 х 6 см, 200 г
48. Фиксатор голеностопа Exclusive	Размер 1 (S): длина не более 30 см (обхват голеностопа 16-24 см), 300 г Размер 2 (M): длина не более 35 см (обхват голеностопа 22-28 см), 300 г Размер 3 (L): длина не более 40 см (обхват голеностопа 26-32 см), 300 г
49. Фиксатор голеностопа Soft	Размер 1 (S): длина не более 30 см (обхват голеностопа 16-24 см), 300 г Размер 2 (M): длина не более 35 см (обхват голеностопа 22-28 см), 300 г Размер 3 (L): длина не более 40 см (обхват голеностопа 26-32 см), 300 г
50. Фиксатор голеностопа Pro	Размер 1 (S): длина не более 30 см (обхват голеностопа 16-24 см), 300 г Размер 2 (M): длина не более 35 см (обхват голеностопа 22-28 см), 300 г Размер 3 (L): длина не более 40 см (обхват голеностопа 26-32 см), 300 г
51. Ремень для ступней	Размер 1 (S): длина не более 52 см, 300 г Размер 2 (L): длина не более 70 см, 300 г
52. Поддержка таза	Д х В х Ш, масса Размер 1 (S): 25 х 8 х 1 см, 300 г Размер 2 (L): 30 х 8 х 1 см, 300 г
53. Фиксатор кисти Exclusive	Размер 1 (S): длина ладони 0-10 см Размер 2 (M): длина ладони 10-15 см Размер 3 (L): длина ладони 16-22 см
54. Браслет	Ш х Д, масса Размер 1 (S) - 5х16 см, 300 г Размер 2 (L) - 5х20 см, 300 г
55. Браслет Soft	Ш х Д, масса Размер 1 (S) - 5х16 см, 300 г Размер 2 (L) - 5х20 см, 300 г
56. Ремни для ног	Д х В х Ш, масса Размер 1(S): 15 х 5 х 1, 200 г Размер 2 (L): 19 х 5 х 1, 200 г
57. Подлокотник	Д х Ш х В, масса Размер 1: 18х6,6х14-20,5; 300 г Размер 2: 19,5х7,5х14-20,5; 300 г Размер 3: 23х9х19-28; 300 г
58. Подлокотник Guppy	Д х Ш х В, масса 40 х 15 х 10 см, 4 кг
59. Подлокотник Zitzi Sharky Pro	Д х Ш, масса Размер 1: 26,5 х 9,5 см, 5 кг

	Размер 2: 30,5 x 9,5 см, 5 кг
60. Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный	Д x Ш, масса Размер 1: 26,5 x 9,5 см, 5 кг Размер 2: 30,5 x 9,5 см, 5 кг
61. Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной	Д x Ш, масса Размер 1: 26,5 x 9,5 см, 5 кг Размер 2: 30,5 x 9,5 см, 5 кг
62. Опора для предплечья	В x Д x Ш, масса 12 x 15 x 1 см, 1 кг
63. Покрытие опоры для предплечья	Д x В x Ш, масса 12 x 15 x 1 см, 200 г
64. Подлокотная опора	Д x В x Ш, масса Размер 1: 20 x 5 x 2 см, 200 г Размер 2: 22 x 5 x 2 см, 200 г Размер 3: 24 x 5 x 2 см, 200 г
65. Крепежи опоры для предплечья левый/правый	Д x В x Ш, масса 15 x 5 x 1 см, 500 г
66. Крепеж подлокотника Gurru	Д x В x Ш, масса 15 x 8 x 5 см, 1 кг
67. Крепеж подлокотника складной	Д x Ш x В, масса 30 x 8 x 15 см, 3,5 кг
68. Крепеж подлокотника фиксированный	Д x Ш x В, масса 30 x 8 x 15 см, 3,5 кг
69. Крепежи подлокотника, правый / левый	Д x Ш x В, масса 35 x 8 x 15 см, 4 кг
70. Столик Zitzi Delfi Pro	Д x Ш, масса Размер 1: 47,5x44 см, 1,2 кг Размер 2: 53,5x50 см, 1,2 кг Размер 3: 53,5x51 см, 1,3 кг
71. Столик Zitzi Sharky Pro	Д x Ш, масса Размер 1: 67x60 см, 1,5 кг Размер 2: 67x65 см, 1,5 кг
72. Столик откидной Zitzi Delfi Pro	Д x Ш, масса Размер 2: 53,5x50 см, 1,2 кг Размер 3: 53,5x51 см, 1,3 кг
73. Столик откидной Zitzi Sharky Pro	Д x Ш, масса Размер 1: 67x60 см, 1,5 кг Размер 2: 67x65 см, 1,5 кг
74. Столик с усилен. крепежами Zitzi Delfi Pro	Д x Ш, масса Размер 2: 53,5x50 см, 1,2 кг Размер 3: 53,5x51 см, 1,3 кг

75. Столик с усилен. крепежами Zitzi Sharky Pro	Д х Ш, масса Размер 1: 67х60 см, 1,5 кг Размер 2: 67х65 см, 1,5 кг
76. Защитное покрытие на столик	В х Д х Ш, масса Размер 1: 60х50 см, 0,2кг Размер 2: 66х56 см, 0,3кг
77. Крепеж столика, складной	Д х Ш, масса Размер 1: 50х10 см, 1,5 кг Размер 2: 60х10 см, 1,8 кг
78. Крепеж столика усиленный, складной	Д х Ш, масса 50х40 см, 2 кг
79. Запорные устройства для столика, правое и левое	12х5х1 см, 0,5 кг
80. Столик Carseat Pro	Д х Ш х В, масса 15х5х1 см, 0,2 кг
81. Столик Pengy	Д х Ш, масса 35х25, 3 кг
82. Подножка Carseat Pro	Д х Ш, масса 30х20 см, 0,2 кг
83. Единая подножка Zitzi Delfi Pro	Д х Ш, масса Размер 1: 31,5х19,5 см, 1 кг Размер 2: 34,5х22,5 см, 1 кг Размер 3: 38х26 см, 1 кг
84. Единая подножка Pengy	Д х Ш, масса 25х20см, 1 кг
85. Единая подножка Seabass Pro	Д х Ш, масса Размер 1, 2 30х20см, 1,5 кг Размер 3: 30х20см, 2кг
86. Платформа для ног	Д х Ш, масса Размер 1: 28 х19 см, 1.5 кг Размер 2: 32 х22 см, 1.6 кг
87. Регулируемая единая подножка	Д х Ш, масса Размер 1: 25х18 см, 1,5 кг Размер 2: 25х19 см, 1,8 кг Размер 3: 25х20 см, 1,8 кг
88. Откидная единая подножка	Д х Ш, масса Размер 1: 25х18 см, 1,8 кг Размер 2: 25х19 см, 1,9 кг Размер 3: 25х20 см, 1,9 кг
89. Откидная единая подножка Seabass Pro	Д х Ш, масса Размер 1: 25х18 см, 1,9 кг Размер 2: 25х19 см, 2 кг

	Размер 3: 25x20 см, 2 кг
90. Раздельные подножки	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5x19 см, 1,5 кг Размер 2: 16x22 см, 1,6 кг Размер 3: 18x22,5 см, 1,7 кг
91. Раздельные подножки Seabass Pro	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5x19 см, 1,5 кг Размер 2: 16x22 см, 1,6 кг Размер 3: 18x22,5 см, 1,7 кг
92. Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5x19 см, 1,5 кг Размер 2: 16x22 см, 1,6 кг
93. Регулируемые раздельные подножки	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5x19 см, 1,5 кг Размер 2: 16x22 см, 1,6 кг Размер 3: 18x22,5 см, 1,7 кг
94. Откидные раздельные подножки	Д х Ш, масса Размер 1: 15,5x19 см, 1,5 кг Размер 2: 16x22 см, 1,6 кг Размер 3: 18x22,5 см, 1,7 кг
95. Откидные регулируемые подножки	Д х Ш, масса Размер 1: 25x18 см, 1,8 кг Размер 2: 25x19 см, 1,9 кг Размер 3: 25x20 см, 1,9 кг
96. Подушка для единой подножки	Д х Ш, масса Размер 1: 15x10 см, 0,2 кг Размер 2: 18x10 см, 0,2 кг Размер 3: 19x10 см, 0,2 кг
97. Подушка для раздельных подножек	Д х Ш, масса Размер 1: 20x10 см, 0,2 кг Размер 2: 22x10 см, 0,2 кг Размер 3: 24x10 см, 0,2 кг
98. Адаптер для подвижной подножки	В х Д х Ш, масса 15x4x4 см, 1 кг
99. Опора для икр, с одним держателем	Ш х Д, масса Размер 0: 9,5x11 см, 0,2 кг Размер 1: 12x14,5 см, 0,2 кг Размер 2: 15x16 см, 0,2 кг
100. Опора для икр, с двумя держателями	Ш х Д, масса Размер 1: 12x14,5 см, 0,2 кг Размер 2: 15x16 см, 0,2 кг Размер 3: 16x22,5 см, 0,2 кг
101. Опора для икр Pengy	Ш х Д, масса 12x14,5 см, 0,2 кг
102. Подушка для опоры для икр	Д х Ш, масса Размер 1: 16x10 см, 0,2 кг Размер 2: 15x10 см, 0,2 кг Размер 3: 16x10 см, 0,2 кг

	Размер 4: 16x10 см, 0,2 кг
103. Пластиковая часть опоры бедра усиленная, правая и левая	Д x Ш, масса Размер 1: 15x10 см, 0,6 кг Размер 2: 19x10 см, 0,6 кг
104. Пластиковая часть опоры бедра, правая и левая	Д x Ш, масса Размер 1: 16x10 см, 0,6 кг Размер 2: 20x10 см, 0,6 кг
105. Пластиковая часть опоры бедра, медиально/латерально +4см	Д x Ш x В, масса Размер 1: 25x12x13 см, 0,5 кг Размер 2: 30x12x13 см, 0,5 кг Размер 3: 35x12x13 см, 0,5 кг
106. Опора бедра, медиально/латерально +4 см	Д x Ш x В, масса Размер 1: 25x12x13 см, 0,6 кг Размер 2: 30x12x13 см, 0,6 кг Размер 3: 35x12x13 см, 0,6 кг
107. Покрытие опоры бедра	Д x Ш x В, масса Размер 1: 10x6x3 см, 0,1 кг Размер 2: 12x6x3 см, 0,1 кг Размер 3: 13x6x3 см, 0,1 кг
108. Покрытие опоры бедра Zitzi Sharky Pro	Д x Ш x В, масса Размер 1: 15x6x3 см, 0,1 кг Размер 2: 17x6x3 см, 0,1 кг
109. Опора для стопы, правая / левая	Д x Ш x В, масса Размер 3: 14x12x3 см, 0,5 кг Размер 4: 16x12x3 см, 0,5 кг
110. Крепеж подножек	Д x Ш x В, масса 10x5x3 см, 0,5 кг
111. Высокие бортики для подножек	Размеры, вес Размер 1: 25x34x5 мм, 1 кг Размер 2: 30x34x5 мм, 1 кг Размер 3: 35x34x5 мм, 1 кг Размер 4: 40x34x5 мм, 1 кг
112. Высокие бортики для раздельных подножек	Размеры, вес Размер 1: 25x17x5 мм, 1 кг Размер 2: 30x17x5 мм, 1 кг Размер 3: 35x17x5 мм, 1 кг Размер 4: 40x17x5 мм, 1 кг
113. Подножка МН	Д x Ш x В, масса 14x6x2 см, 0,2 кг
114. Непромокаемое покрытие	Ш x Д x В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг

	Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг
115. Подушка сиденья	Ш х Д х В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг
116. Подушка сиденья T-foam	Ш х Д х В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг
117. Подушка сиденья Coolmax	Ш х Д х В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг
118. Подушка сиденья Zitzi Sharky Pro	Ш х Д х В, масса Размер 1: 40x60x1 см, 0,5 кг Размер 2: 50x70x1 см, 0,5 кг
119. Подушка сиденья Алькантара	Ш х Д х В, масса Размер 1: 30x40x1 см, 0,2 кг Размер 2: 35x45x1 см, 0,2 кг Размер 3: 40x50x1 см, 0,2 кг
120. Пластина адаптера	Ш х Д х В, масса Размер 1: 25x25x2 см, 2 кг Размер 2: 30x30x2 см, 3 кг Размер 3: 35x35x2 см, 3,5 кг
121. Пластина адаптера Zitzi Sharky Pro	Д х Ш х В, масса 35x30x8 см, 1 кг
122. Пластина адаптера с внешней резьбой	Д х Ш х В, масса 10x10x3 см, 2 кг
123. Адаптер сиденья	Д х Ш х В, масса Размер 1: 23x23x1 см, 1 кг Размер 2: 25x25x1 см, 1 кг
124. Адаптер сиденья	Д х Ш х В, масса 30x30x2 см, 2 кг
125. Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro	Д х Ш х В, масса 30x30x2 см, 2 кг
126. Адаптер сиденья универсальный	Д х Ш х В, масса 30x30x2 см, 2 кг
127. Адаптер сиденья Carseat Pro	Д х Ш х В, масса 35x30x10 см, 1,5 кг
128. Базовая платформа	Д х Ш х В, масса 35x30x5 см, 1 кг

адаптера Pengy	
129. Зимний мешок	Д х Ш х В, масса Размер 1: 100х30х2 см, 0,5 кг Размер 2: 110х40х2 см, 0,5 кг Размер 3: 120х45х2 см, 0,5 кг
130. Мобиль	Ш х Д, масса 40х50 см, 0,5 кг
131. Капюшон	В х Д х Ш, масса 40х50х20 см, 2 кг
132. Капюшон Pengy	В х Д х Ш, масса 100х50х80 см, 2 кг
133. Газовая пружина	Для спинки: Длина, мм, сила, Н, масса: 185мм, 200 Н, 1 кг 205мм, 300 Н, 1 кг 185мм, 500 Н, 1 кг
	Для сиденья: Длина, мм, сила, Н, масса: 365 мм, 200 Н, 1 кг 380 мм, 800 Н, 1 кг 380 мм, 1200 Н, 1 кг
134. Ручка для толкания	Размеры, масса Размер 1: 40х20х4 см, 2 кг Размер 2: 45х25х4 см, 2 кг
135. Ручка для сопровождающего лица	Размеры, масса 50х30х4 см, 2 кг
136. Ручка для сопровождающего лица	Размеры, масса 50х25х4 см, 2 кг
137. Ручка для сопровождающего лица	Размеры, масса 50х30х4 см, 2 кг
138. Ручка для сопровождающего лица	Размеры, масса 40х30х4 см, 2 кг
139. Ручки для сопровождающего лица Seabass Pro	Размеры, масса 50х3х3 см, 0,5 кг
140. Ручка М6х25	Д х Ш х В, масса 4х4х4 см, 0,2 кг
141. Педаль (для регулировки высоты)	Д х Ш х В, масса 15х7х5 см, 0,5 кг
142. Набор кронштейнов для транспортировки	Д х Ш х В, масса 15х15х5 см, 2 кг

143. Ручка откидывания	Д х Ш х В, масса 20х3х2 см, 0,2 кг
144. Петля для регулировки наклона сиденья	Д х Ш х В, масса Размер 1: 15х2х2 см, 0,1 кг Размер 2: 20х2х2 см, 01, кг
145. Передние колеса цельнолитые Pengy	Диаметр 20 см, 30 см, масса 1 кг
146. Передние колеса цельнолитые Seabass Pro	Диаметр 15 см, 18 см, масса 1 кг
147. Передние колеса цельнолитые Guppy	Диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см, масса 1,2 кг
148. Передние колеса пневматические, 18 см	Диаметр 18 см, масса 1 кг
149. Задние колеса цельнолитые Flipper Pro Flex	Диаметр 30 см, масса 1,2 кг Диаметр 40 см, масса 1,3 кг
150. Задние колеса цельнолитые	Диаметр 30 см, масса 1,2 кг Диаметр 40 см, масса 1,3 кг Диаметр 50 см, масса 1,4 кг Диаметр 55 см, масса 1,5 кг Диаметр 60 см, масса 1,6 кг
151. Задние колеса пневматические	Диаметр 30 см, масса 1,2 кг Диаметр 40 см, масса 1,3 кг
152. Задние колеса пневматические Guppy, 40 см	Диаметр 40 см, масса 1,3 кг
153. Задние колеса пневматические Guppy	Диаметр 50 см, масса 1,4 кг Диаметр 55 см, масса 1,5 кг Диаметр 60 см, масса 1,6 кг
154. Антипрокидыватель Guppy	В х Д х Ш, масса 20х15х15 см, 1 кг
155. Антипрокидыватель правый/левый	В х Д х Ш, масса 20х15х3 см, 1 кг

156. Защита спиц	Диаметр, масса: 40 см, 0,2 кг 42 см, 0,2 кг 50 см, 0,3 кг
157. Брызговик	Д x Ш x В, масса 40x5x10 см, 0,5 кг 45x5x10 см, 0,5 кг 50x5x10 см, 0,6 кг
158. Вилка переднего колеса	В x Д x Ш, масса 8x10x5 см, 0,5 кг
159. Ось быстросъемного колеса	Размер 1: для колеса диаметром 30/40 см, Д x Ш - 98x12мм, масса 0,1 кг Размер 2: для колеса диаметром 50/60 см, Д x Ш - 103x12мм, масса 0,2 кг
160. Барабанный тормоз (правый и левый)	Размер 1: для колеса диаметром 30/40 см, Д x Ш - 10x50 мм, масса 1 кг Размер 2: для колеса диаметром 50/60 см, Д x Ш - 12x53 мм, масса 1,3 кг
161. Крепеж брызговиков	Д x Ш x В, масса Размер 1: для колес 50 см - 20x15x0,5 см, 1 кг Размер 2: для колес 55 см - 25x20x0,5 см, 1,1 кг Размер 3: для колес 60 см - 30x20x0,5 см, 1,2 кг
162. Ручка тормоза с красным стопорным механизмом	Д x Ш x В, масса 15x7x2 см, 1 кг
163. Трос ручного тормоза	Размеры, масса Seabass: 105/123 см, 0,2 кг Guppy: 125/143 см, 0,3 кг
164. Стояночные тормоза	Д x Ш x В, масса 12x7x4 см, 0,1 кг 15x7x4 см, 0,1 кг 30x4x4 см, 0,2 кг
165. Педаль тормоза Pengy, пластиковая	Д x Ш x В, масса 9x6x1 см, 0,1 кг
166. Крепление для стояночного тормоза для колес	Д x Ш x В, масса Размер 1: для колес 30/40 см - 14x3x3 см, 0,2 кг Размер 2: для колес 40 см - 20x4x3 см, 0,3 кг Размер 3: для колес 50/60 см - 22x4x3 см, 0,3 кг
167. Зубчатая муфта	Д x Ш x В, масса 6x1x1 см, 0,1 кг
168. Клин	Д x Ш x В, масса 35x15x5 см, 0,1 кг
169. Профиль спинки	Ш x Д x В, масса 8x70x1,5 см, 1 кг 8x75x1,5 см, 1,2 кг
170. Пластиковая часть спинки	Ш x Д x В, масса 40x60x3 см, 1 кг

	50x70x3 см, 1,5 кг
171. Подушка спинки Zitzi Delfi Pro	Ш х Д, масса Размер 1: 40x60 см, 0,5 кг Размер 2: 50x70 см, 0,5 кг Размер 3: 25x40 см, 0,2 кг
172. Подушка спинки Carseat Pro	Ш х Д, масса Размер 2: 25x40 см, 0,2 кг Размер 3: 25x50 см, 0,2 кг
173. Подушка спинки Coolmax	Ш х Д, масса 25x35 см, 0,2 кг
174. Подушка спинки Zitzi Sharky Pro	Ш х Д, масса Размер 1: 40x60 см, 0,2 кг Размер 2: 45x70 см, 0,2 кг
175. Подушка спинки из Алькантары Zitzi Delfi Pro	Ш х Д, масса Размер 1: 40x60 см, 0,5 кг Размер 2: 50x70 см, 0,5 кг Размер 3: 25x40 см, 0,2 кг
176. Подушка спинки из Алькантары Carseat Pro	Ш х Д, масса Размер 2: 25x40 см, 0,2 кг Размер 3: 25x50 см, 0,2 кг
177. Подушка спинки из Алькантары Zitzi Sharky Pro	Ш х Д, масса Размер 1: 40x60 см, 0,2 кг Размер 2: 45x70 см, 0,2 кг
178. Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro	Д х Ш х В, масса 18x12x7 см, 0,1 кг
179. Поддержка поясницы Zitzi Sharky Pro	Ш х В х толщина, масса Размер 1: 25x50x0,5 см, 0,1 кг Размер 2: 30x60x0,5 см, 0,1 Kg
180. Пластина, регулируемая по глубине	Д х Ш х В, масса Размер 1: 15x13x0,5 см, 0,2 кг Размер 2: 17x15x0,5 см, 0,2 кг
181. Упор для сопровождающего лица Seabass Pro	Д х Ш х В, масса 20x6x2 см, 0,2 кг
182. Упор для сопровождающего лица Gurru	Д х Ш х В, масса 20x8x2 см, 0,2 кг
183. Корзинка	Д х Ш х В, масса 40x40x20 см, 0,3 кг
184. Дождевик	В х Д х Ш, масса 120x50x50 см, 0,1 кг

185. Вертикальная рама	Длина х ширина х глубина, масса 99х40х20 см, 10 кг 120х50х30 см, 15 кг
------------------------	--

5. Применяемые материалы в составе кресел-колясок (которые соприкасаются с пользователем)

Таблица 19.

Наименование модели	Материалы
Zitzi Delfi Pro (модели Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro)	Спинка/сиденье: пластик ABS – (ABS+AF+SQ) Опора для ног: пластик ABS, A3100, сталь SS-2172, алюминий A3203 Подлокотник: пластик PU, YU-012 Столик: пластик PETG Обивка/подушки: Искусственный велюр – Froté inc. Trevera cs Ремни: Нейлон - PP Nylon, нейлон - Exclusive board lamin, Black Skai Рама: сталь SS-2127, алюминий A3203
Zitzi Pengy (модели Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy)	Спинка/сиденье: пластик ABS – (ABS+AF+SQ) Опора для ног: пластик ABS A3100, сталь SS-2172, алюминий A3203 Подлокотник: пластик PU YU-012 Столик: пластик PETG Обивка/подушки: Искусственный велюр – Coolmax Spacer Royal, Искусственный велюр – Froté inc. Trevera cs Ремни: Нейлон - PP Nylon Рама: сталь SS-2127, алюминий A3203
Zitzi Sharky Pro (модели Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro)	Спинка/сиденье: пластик ABS – (ABS+AF+SQ) Опора для ног: пластик ABS A3100, сталь SS-2172, алюминий A3203 Подлокотник: пластик PU YU-012

Snapper, Ziti Sharky Pro Seabass)	Столик: пластик PETG Обивка/подушки: искусственный велюр – Froté inc. Trevera cs Ремни: нейлон - PP Nylon, нейлон - Exclusive board lamin, Black Skai Рама: сталь SS-2127, алюминий A3203
Anatomic Sits (модели Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro)	Спинка/сиденье: пластик PEHD 100 Опора для ног: пластик ABS A3100, сталь SS-2127, алюминий A3203 Подлокотник: пластик PUYU-012 Столик: пластик PETG Обивка/подушки: искусственный велюр – Froté inc. Trevera cs, искусственный велюр – Coolmax Spacer Royal Ремни: нейлон- PP Nylon Рама: сталь SS-2127, алюминий A3203
Anatomic Soft Sits (модели Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro)	Спинка/сиденье: пластик PEHD 100 Опора для ног: пластик ABS A3100, сталь SS-2127, алюминий A3203 Подлокотник: пластик PU YU-012 Столик: пластик PETG Обивка/подушки: искусственный велюр – Froté inc. Trevera cs, искусственный велюр – Coolmax Spacer Royal Ремни: нейлон - PP Nylon Рама: сталь SS-2127, алюминий A3203
Car Seat Pro	Спинка/сиденье: пластик ABS – (ABS+AF+SQ) Опора для ног: пластик ABS A3100, сталь SS-2172, алюминий A3203 Подлокотник: пластик PU YU-012 Столик: пластик PETG

	Обивка/подушки: Искусственный велюр – Froté inc. Trevera cs
	Ремни: нейлон - PP Nylon, нейлон - Exclusive board lamin, Black Skai
	Рама: сталь SS-2127, алюминий A3203

Таблица 20. Применяемые материалы принадлежностей (которые соприкасаются с пользователем)

Название	Материал
Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky Pro	Искусственный велюр– Froté inc. trevera cs
Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro, Zitzi Sharky Pro	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pengy	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pengy удлиненный	
Подголовник Zitzi Sharky Pro	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Standard	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Standard удлиненный	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Mini	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Serie Adult	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Junior	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Junior Anatomic Sits	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Single	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Plush	Искусственный велюр– Froté inc. trevera cs
Подголовник Pro Plush регулируемый	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник Black Bear	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подголовник LINX Plush	Искусственный велюр– Froté inc. trevera cs
Подголовник LINX Plush регулируемый	Искусственный велюр– Froté inc. trevera cs
Подголовник Carseat Pro	Искусственный велюр– Froté inc. trevera cs
Подголовник Carseat Pro удлиненный	Искусственный велюр– Froté inc. trevera cs
Активная повязка для лба, Zitzi	Нейлон - PP Nylon
Активная повязка для лба, Junior, Pro Serie	Нейлон - PP Nylon
Активная повязка для лба, Adult, Pro Serie	Нейлон - PP Nylon
Грудной ремень Х-образный Pro	Нейлон - PP Nylon
Грудной ремень Х-образный Exclusive	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Грудной ремень Н-образный Pro	Нейлон - PP Nylon
Грудной ремень Н-образный Exclusive	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Грудной ремень Zitzi Delfi Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Грудной ремень Soft Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Бедренный ремень Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Бедренный ремень Comfort Pro	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Бедренный ремень Exclusive	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Бедренный антитротационный ремень	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Фиксатор голеностопа Exclusive	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Фиксатор голеностопа Soft	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai

Фиксатор голеностопа Pro	Нейлон - PP Nylon
Ремень для ступней	Нейлон - PP Nylon
Поддержка таза	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Браслет	Нейлон - PP Nylon
Браслет Soft	Нейлон - Exclusive board lamin Black Skai
Ремни для ног	Нейлон - PP Nylon
Подлокотник	Пластик PU YU-012
Подлокотник Guppy	Пластик PU YU-012
Подлокотник Zitzi Sharky Pro	
Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный	Пластик PU YU-012
Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной	Пластик PU YU-012
Покрытие опоры для предплечья	Искусственная кожа HJ01
Подлокотная опора	Искусственная кожа HJ01
Столик Zitzi Delfi Pro	Пластик PETG
Столик Zitzi Sharky Pro	Пластик PU YU-012
Столик откидной Zitzi Delfi Pro	Пластик PETG
Столик откидной Zitzi Sharky Pro	Пластик PU YU-012
Столик с усилен. крепежами Zitzi Delfi Pro	Пластик - PETG
Столик с усилен. крепежами Zitzi Sharky Pro	Пластик PU YU-012
Столик Carseat Pro	Пластик - PETG
Столик Pengy	Пластик - PETG
Защитное покрытие на столик	Пластик - PETG
Крепеж столика, складной	Сталь SS-2127
Крепеж столика усиленный, складной	Сталь SS-2127
Запорные устройства для столика, правое и левое	Сталь SS-2127
Подножка Carseat Pro	Пластик ABS A3100
Единая подножка Zitzi Delfi Pro	Пластик ABS A3100
Единая подножка Pengy	Пластик ABS A3100
Единая подножка Seabass Pro	Пластик ABS A3100
Регулируемая единая подножка	Пластик ABS A3100
Откидная единая подножка	Пластик ABS A3100
Откидная единая подножка Seabass Pro	Пластик ABS A3100
Раздельные подножки	Пластик ABS A3100
Раздельные подножки Seabass Pro	Пластик ABS A3100
Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro	Пластик ABS A3100
Регулируемые раздельные подножки	Пластик ABS A3100
Откидные раздельные подножки	Пластик ABS A3100
Откидные регулируемые подножки	Пластик ABS A3100
Подушка для единой подножки	ПВХ - AZ
Подушка для раздельных подножек	ПВХ - AZ
Опора для икр, с одним держателем	Пластик ABS A3100
Опора для икр, с двумя держателями	Пластик ABS A3100
Опора для икр Pengy	Пластик ABS A3100
Подушка для опоры для икр	ПВХ - AZ
Опора для стопы левая/правая	Пластик ABS A3100
Высокие бортики для подножек	Нейлон - PP Nylon

Высокие бортики для раздельных подножек	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Платформа для ног	Пластик ABS A3100
Непромокаемое покрытие	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подушки сиденья	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подушка сиденья Coolmax	Искусственный велюр - Coolmax
Подушка сиденья Алькантара	Искусственная замша - Alcantara
Покрытие опоры бедра	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Покрытие опоры бедра Zitzi Sharky Pro	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Зимний мешок	Нейлон/полиэстер - PP Nylon/VS-HT100
Мобиль	Алюминий A3203
Капюшон	Нейлон - PP Nylon
Ручка для толкания	Пластик PEHD 100
Ручка для сопровождающего лица (844230, 844012, 844015)	Пластик ABS A3100
Ручки для сопровождающего лица (152172)	Пластик PEHD 100
Набор инструментов для настройки (ремонта) электропривода	Пластик ABS A3100
Набор кронштейнов для транспортировки	Сталь SS-2127
Ручка откидывания	Пластик ABS A3100
Ручка тормоза с красным стопорным механизмом	Пластик ABS A3100
Стояночный тормоз	ПВХ- AZ
Подушки спинки (Zitzi Delfi Pro, Carseat Pro, Zitzi Sharky Pro)	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подушка	Искусственный велюр – Froté inc. trevera cs
Подушки спинки из Алькантары	Искусственная замша - Alcantara
Корзинка	Нейлон - PP Nylon
Дождевик	Нейлон - PP Nylon
Вертикализатор	Сталь SS-2172

5. Эксплуатация

Меры безопасности

- Необходимо выполнять все описанные в руководстве пункты и следить за состоянием кресла.
- Регулярно следите за тем, чтобы все болты были надежно закручены.
- Отслеживайте износ ремней и подушек.
- Не сажайте пользователя в сиденье, пока не удостоверитесь в надежности крепления кресла на раме. Характерный “щелчок” означает фиксацию кресла.
- Не наклоняйте кресло слишком сильно вперед, когда в нем находится пользователь.

Серия Zitzi Delfi Pro

Напоминаем, что все кресла-коляски данной серии сконструированы на основе сиденья Zitzi Delfi Pro и представляют собой комбинацию сиденья Zitzi Delfi Pro и различных видов рам.

Поэтому порядок использования эксплуатации сиденья Zitzi Delfi Pro относится ко всем моделям данной серии.


Сиденье Zitzi Delfi Pro

Ключ. Для удобства регулировки ключ-шестигранник расположен в металлическом профиле спинки.





Закрепление спинки.

Профиль спинки кресла крепится автоматически. Спинка примет правильное положение автоматически.

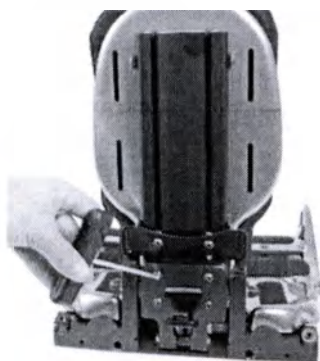

Регулировки сиденья

Регулируя глубину спинки, вы с лёгкостью сможете компенсировать разницу длины ног, а также абдукцию/аддукцию ног. Под обшивкой кресла расположены болты регулировки. Болты нужно лишь слегка ослабить.

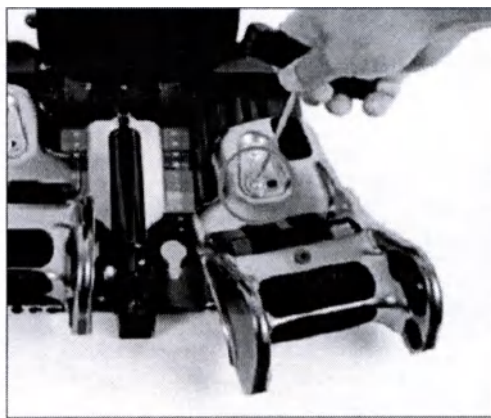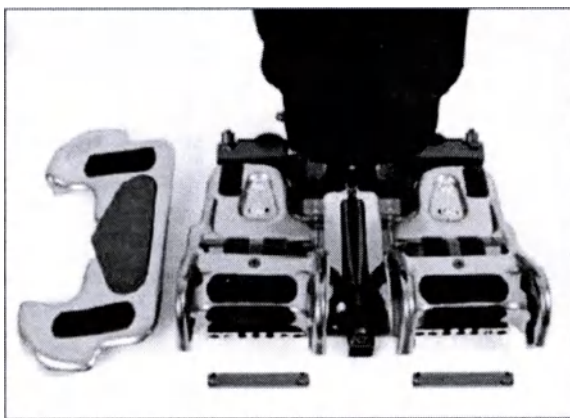

Регулировка ширины сиденья

Для того чтобы изменить ширину сиденья, необходимо отрегулировать опоры бёдер. Максимальная ширина устанавливается при помощи размещения направляющей опоры в паз №3;


для получения минимальной ширины сиденья установите ось в паз №1.

- Открутите два болта при помощи шестигранного ключа.
 - Передвиньте направляющую опоры в нужный паз.
 - Затяните болты для достижения желаемой позиции опоры бедра.
- (Направляющая опоры по умолчанию установлена в паз №1).



Регулировка глубины сиденья



Шестигранным ключом ослабьте два болта и установите опору бедра в желаемое положение. Закрутите болты.

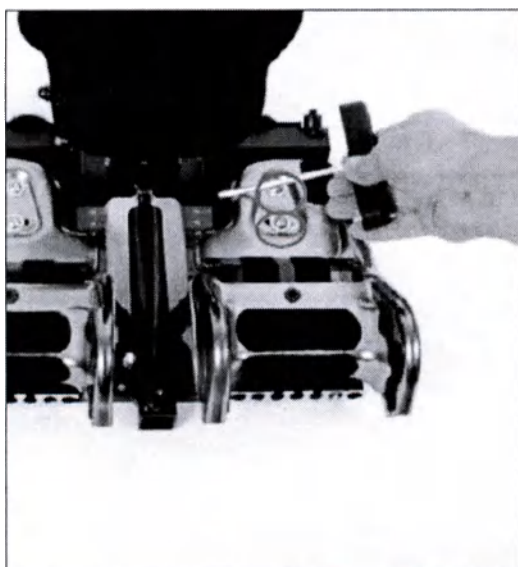

Регулировка углубления сиденья

При регулировке глубины сиденья следует также отрегулировать скат сиденья индивидуально под пользователя. Например, если глубина сиденья установлена на 23 см (серое поле), то углубление сиденья также должно быть установлено в сером поле регулировки для сохранения анатомической формы сиденья.

Шестигранным ключом ослабьте болты, переместите направляющую опоры бёдер в желаемый паз и поле регулировки. Закрутите болты.

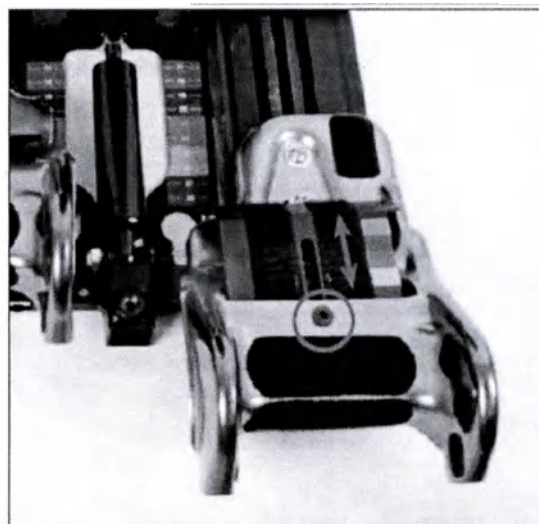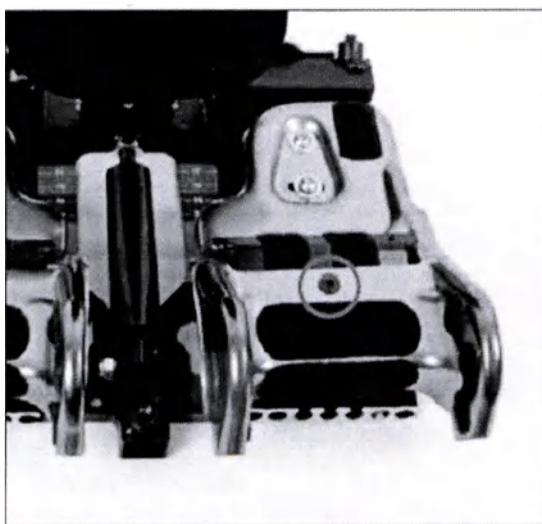


Аддукция/абдукция – болт В


Ослабьте болт В и установите опору бедра в нужное положение. Затяните болт.



Нейтральное положение

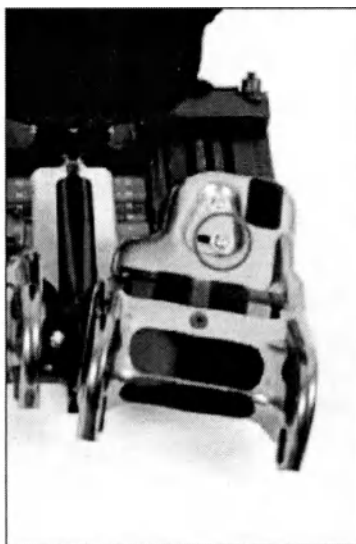

Аддукция

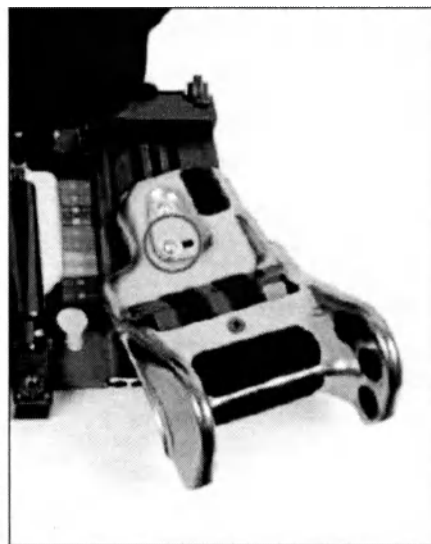

Абдукция


Регулировка угла наклона спинки

Для активации рычага регулировки потяните его на себя, затем вверх. Нажмите на рычаг и установите необходимый угол наклона. Для фиксации отпустите рычаг и установите его в режим защиты от детей.




Внимание! Во время регулировки спинки рычаг должен находиться в нижнем положении!

Регулировка угла наклона спинки

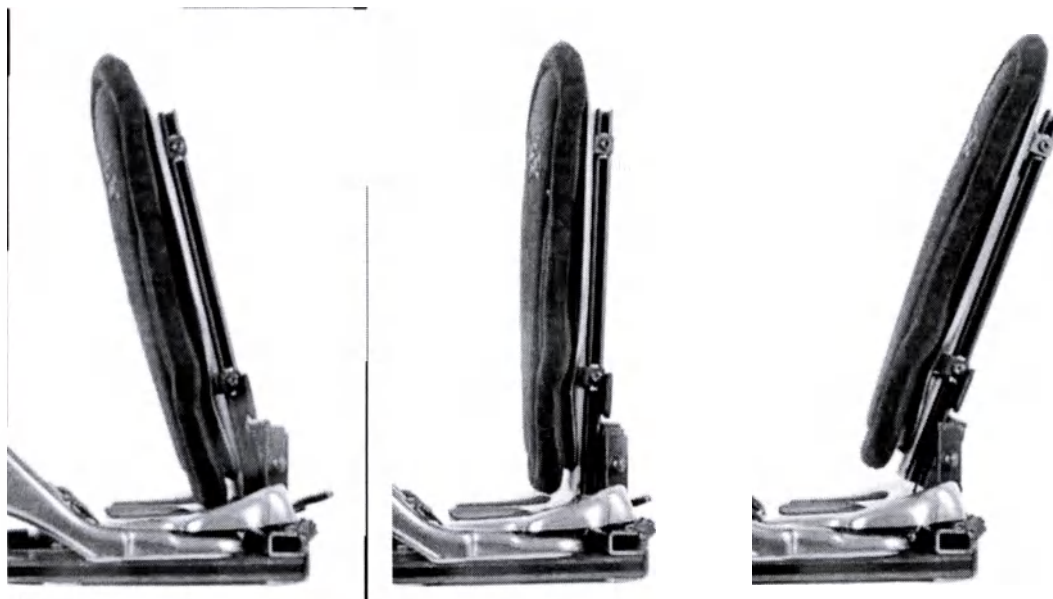



Регулировка высоты спинки

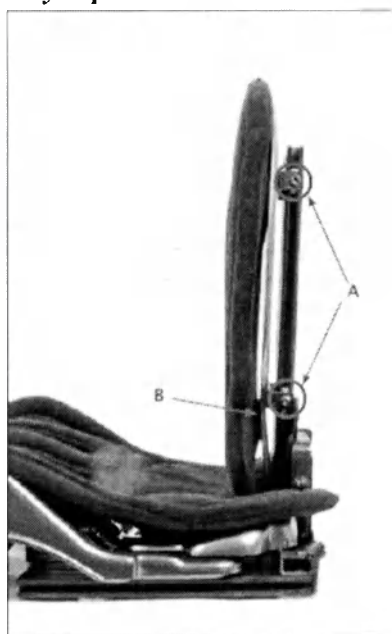

- Ослабьте болты А с обеих сторон профиля спинки (по два на каждой стороне).
- Установите нужную высоту.
- Закрутите болт.

Установите спинку таким образом, чтобы Вы могли использовать встроенную поддержку поясницы!

Регулируемая спинка

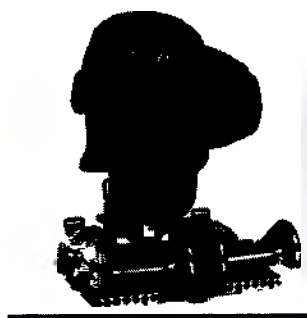
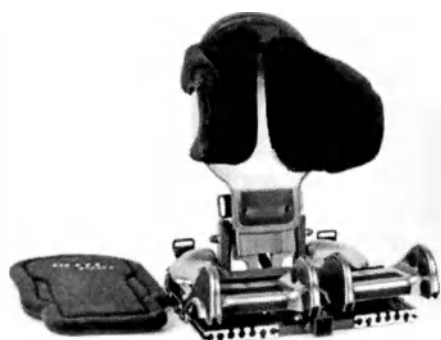


Установка боковой поддержки

- A - пластина
- B - шайбы
- C - ручка
- D - болт
- E - распорная шайба
- F - усиленный кронштейн
- G - пластина спинки

Установите детали в следующем порядке:

- Приложите (F) к (A).
- Вставьте (D) в (E).
- Вытяните их через паз на пластине спинки.
- Добавьте сверху шайбу и ручку.
- Установите обшивку / подушки и зафиксируйте ручку.

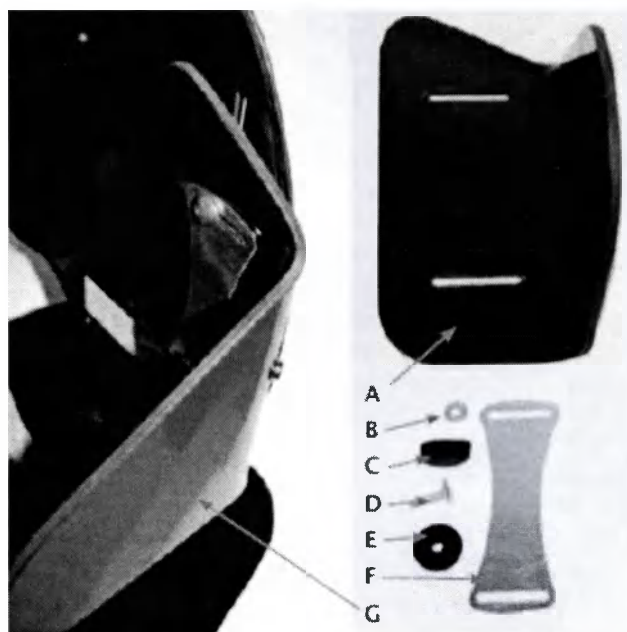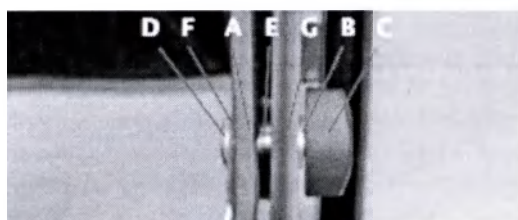


Регулировки

Ослабьте ручки (по 2 на каждой стороне, всего 4) и установите спинку в нужное положение. Затяните ручки, закрепив установленное положение спинки.




Поддержка таза

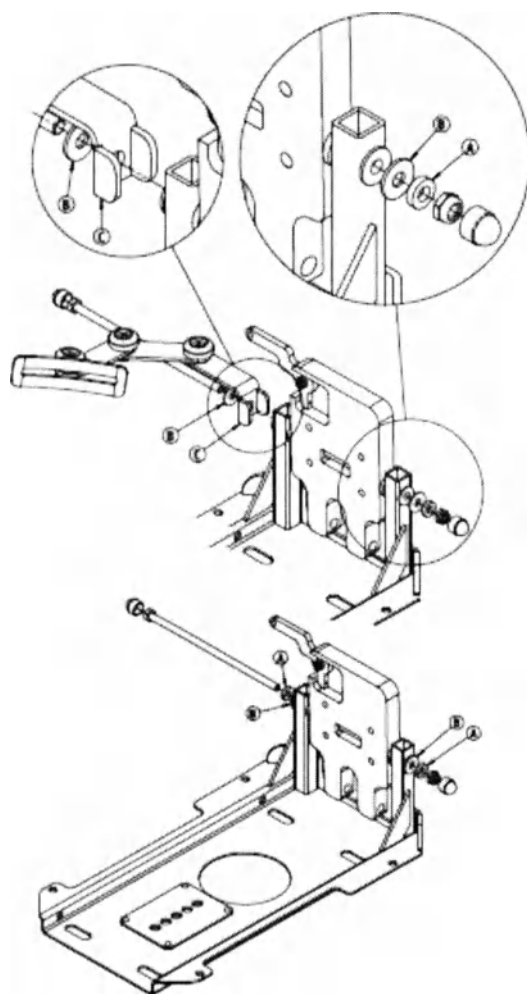

1. Открутите и достаньте длинный винт.
2. Снимите толстые шайбы (А) и установите поддержку таза (С) в исходное положение.
3. Шайбы (В) добавляются после поддержки таза (С), закрепляя ее.
4. Снова соберите конструкцию при помощи длинного винта.

Бедренный ремень

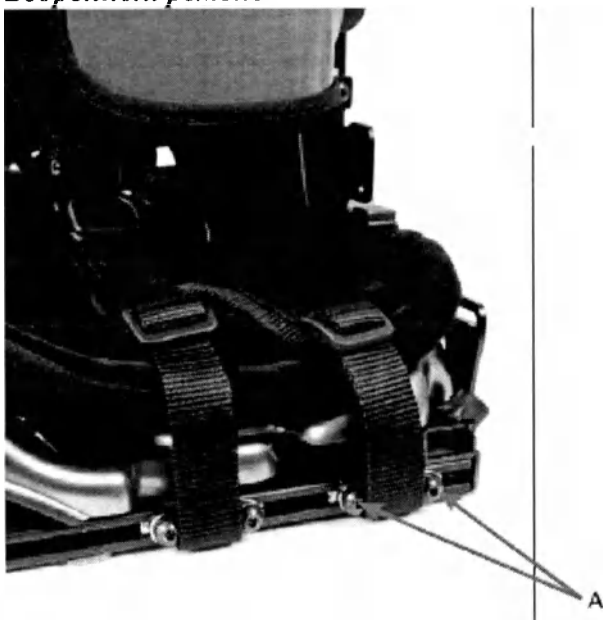


Бедренный ремень легко регулируется болтами А. После установки ремня в нужное положение закрепите болт (А).



Установка верхнего кронштейна

(А) Верхний крепёжный кронштейн

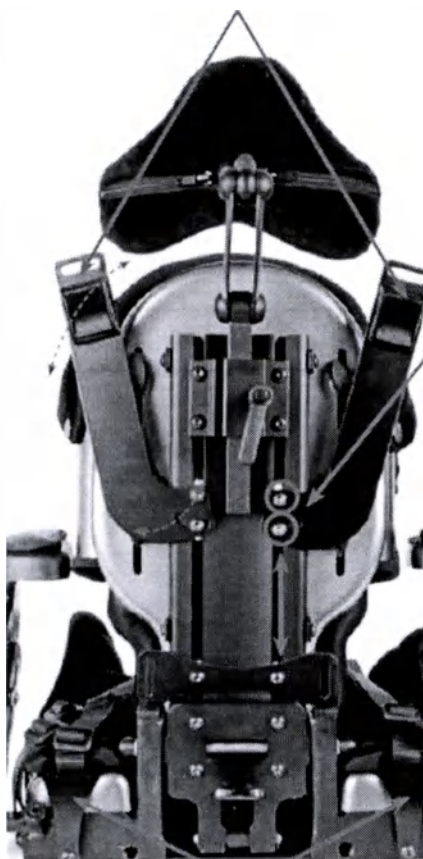

Установка верхнего кронштейна

Установка верхнего кронштейна (А)

Для начала возьмите шестигранный ключ, встроенный в верхнюю часть профиля спинки. Затем установите верхний крепёжный кронштейн в пазы профиля спинки.

Регулировка верхних крепёжных кронштейнов

Ослабьте болты и сделайте необходимые регулировки. Высота верхних крепёжных кронштейнов должна быть такой, чтобы направление вытягивания ремней было немного

выше плечевой зоны. Затяните болты.


Установка ремня

Вытяните ремень через паз в пряжку. Используйте прикрепленные трёхщелевые пряжки (Е). Не забудьте поставить крепёж подголовника на его место, если он был снят перед установкой ремней.

Регулировка направления затягивания и ширины

Ослабьте болт верхнего крепёжного кронштейна и установите желаемую высоту. Закрутите верхний болт. Отрегулируйте необходимый угол и затяните болт.

(В) Нижний кронштейн

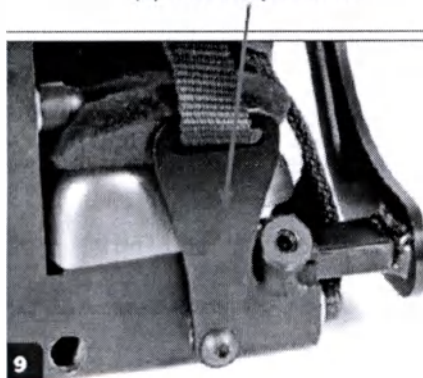

Пожалуйста, убедитесь, что шея ребенка не передавлена ремнями, а подушки установлены верно.

Подлокотник

При установке подлокотника вставьте его в кронштейн на боковой стороне кресла. Затяните болт (А).


Регулировка ширины: Ослабьте болт А и установите желаемую ширину. Затяните болт.

Регулировка глубины: Снимите болты В и С и установите желаемую глубину сиденья. Вставьте и затяните болты.

Поворот подлокотника: Ослабьте болт С и установите желаемый угол поворота подлокотника. Затяните болт.

Регулировка высоты пластины подлокотника: Ослабьте ручку (D) и установите высоту на необходимый уровень. Затяните ручку.

Регулировка угла наклона пластины подлокотника: Ослабьте болт и установите угол наклона пластины. Затяните ручку.

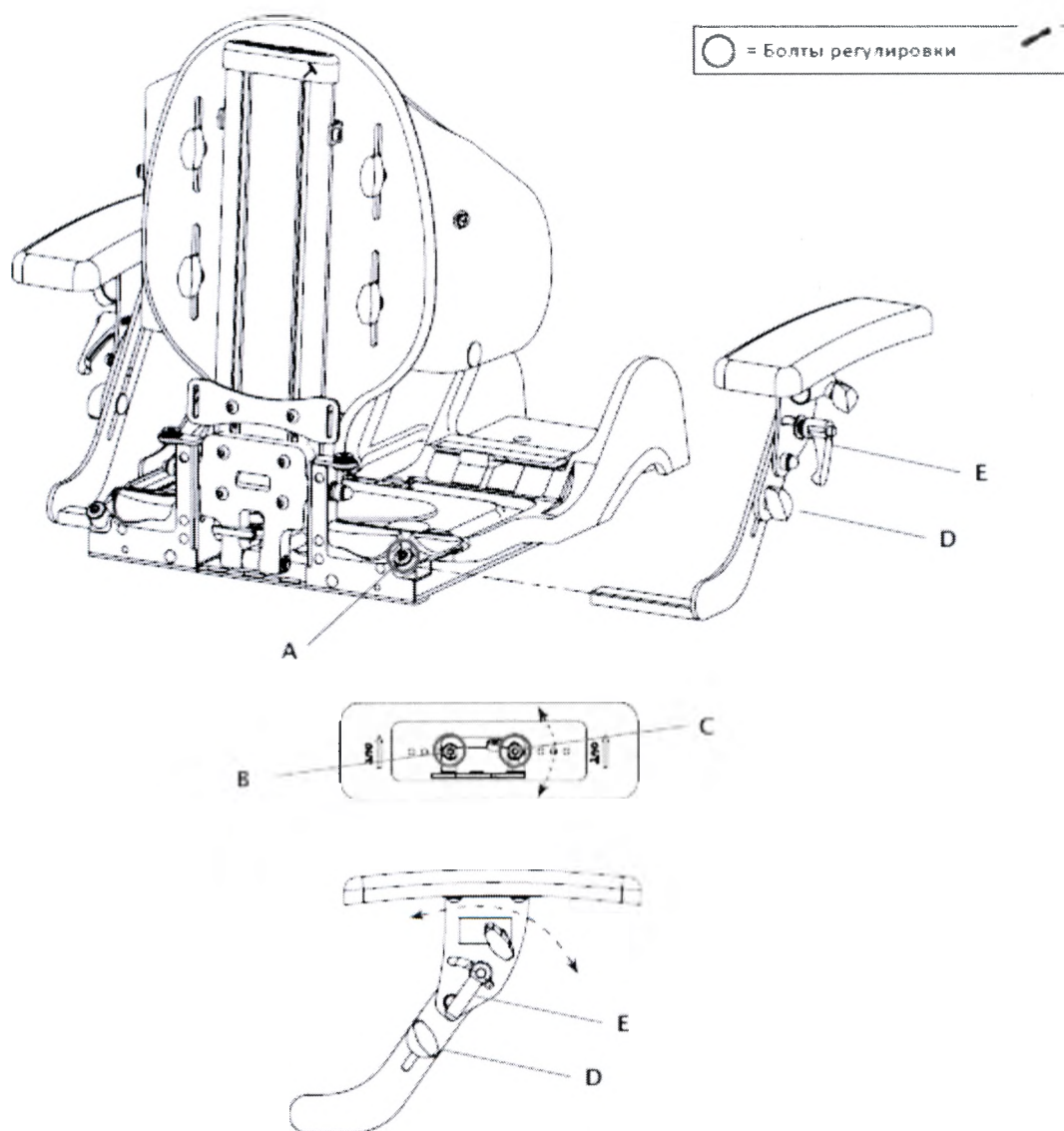


Опора предплечья

замените их на более

длинные и установите

держатель

держателем и

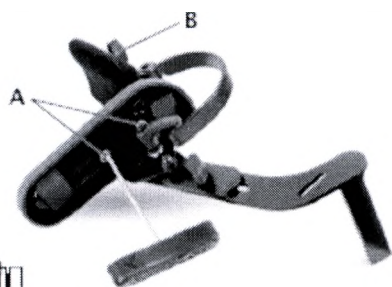

Монтаж

- Полностью ослабьте винты (А) и замените их на более длинные.

- Воспользуйтесь фиксирующими шайбами и установите их на более длинные винты.

- Установите опору предплечья на держатель подлокотника, разместив ее между держателем и пластиной подлокотника.

- Крепко затяните винты (А)!

Регулировка по высоте

- Ослабьте ручку (В) и отрегулируйте до желаемой высоты.

- Затяните ручку.

Регулировка угла

- Ослабьте винт (С) и отрегулируйте необходимый угол.

- Затяните винт (С) крепко!

Примечание! Крепления опоры предплечий предполагают правую и левую формы.

Столик


Поместите столик на подлокотники, нажмите вниз на крепления столика, а затем зафиксируйте его под пластиной подлокотника. Нажимайте на крепления до тех пор, пока столик не зафиксируется под пластиной подлокотника. У вас есть 3 варианта крепления на столике, которые могут быть по-разному использованы в зависимости от ширины/подлокотников.

Столик идет в комплекте с креплением.






Поместите столик на пластины подлокотников так, чтобы задняя часть столика находилась за подлокотниками.

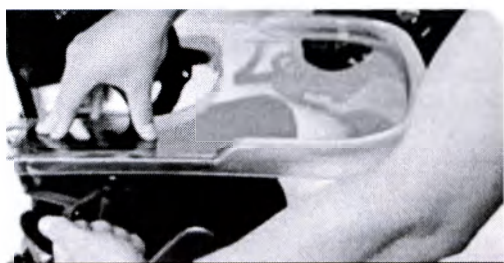

Нажимайте на столик до того момента, как стержень крепления столика зафиксироваться и покажется под пластиной подлокотника.

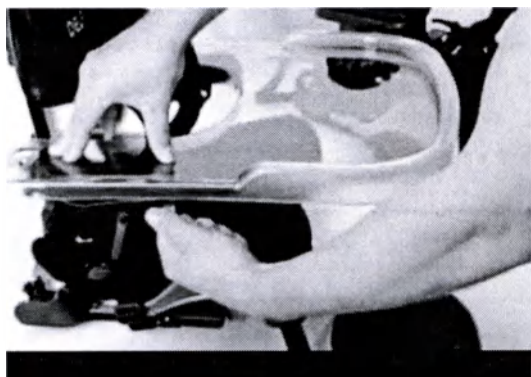

Нажмите на стержень крепления. Когда он зафиксироваться, отпустите его.

Не поднимайте кресло-коляску со стороны столика или за него!

Единая подножка



Регулировка коленного шарнира (А)

- Ослабьте ручку (А) и отрегулируйте положение подножки.
- Затяните ручку, когда желаемая позиция будет достигнута.

Важно: Зубцы должны соответствовать друг другу.



Крепко закрутите болт!

Единая подножка – регулировка по высоте (В)


- Ослабьте ручку (В) и отрегулируйте подножку в нужном положении.
- Затяните ручки, зафиксировав желаемое положение.

Единая подножка - регулировка угла подъема (С)

- Ослабьте ручку (С) и установите желаемый угол подъема. Затяните ручку.

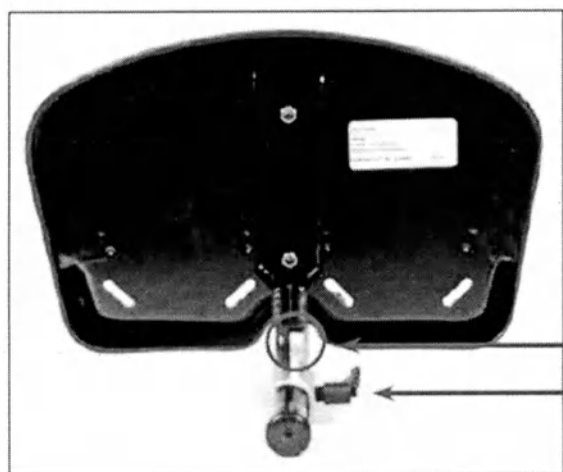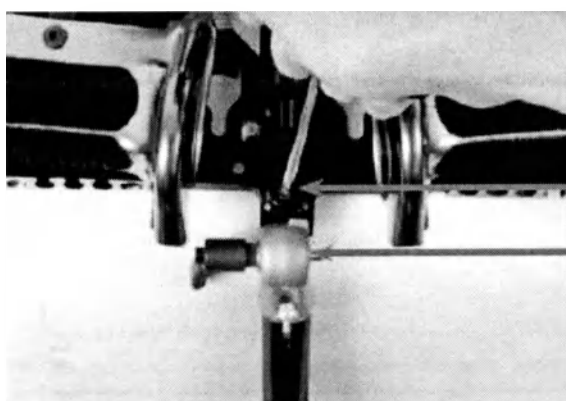

Раздельные подножки

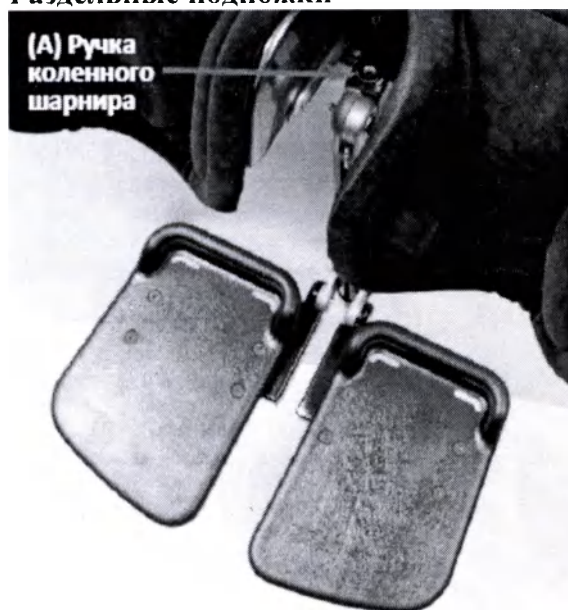

Регулировка коленного шарнира (А)

- Ослабьте ручку (А) и отрегулируйте в нужном положении.
- Затяните ручку, когда желаемая позиция будет достигнута.



Важно: Зубцы должны соответствовать друг другу.
Крепко закрутите болт!

Раздельные подножки – регулировка по высоте (В)


- Ослабьте ручку (В) и установите подножку в нужное положение.
- Затяните ручки, зафиксировав желаемое положение.

Раздельные подножки – регулировка угла подъема (С)

- Ослабьте ручку (С) и установите желаемый угол подъема. Затяните ручку.

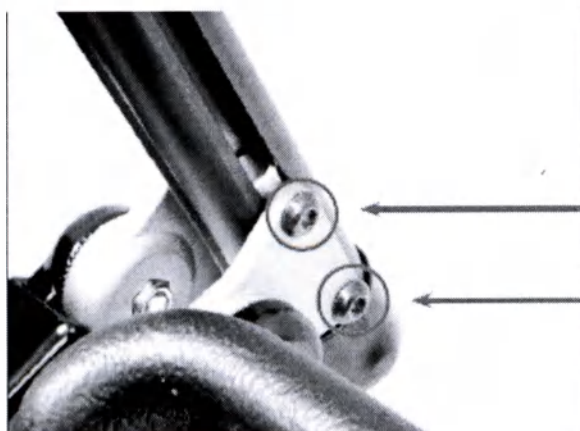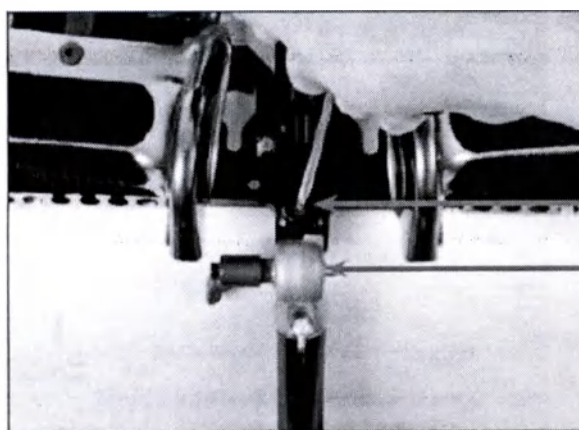

Регулируемая единая подножка

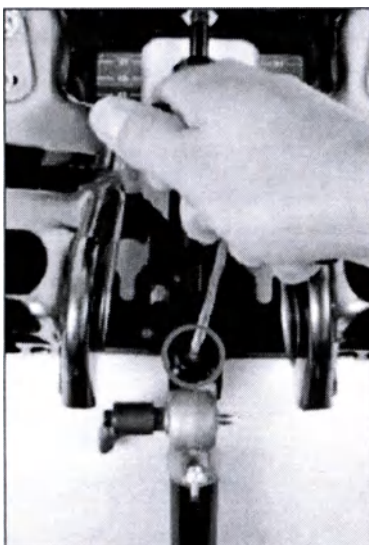

Установка подножки

Регулировка коленного шарнира (А)



- Ослабьте болт (А) и установите нужное положение.
- Затяните ручку.

Единая регулируемая подножка – регулировка высоты (В)

- Ослабьте ручку (В) и установите подножку в нужное положение.
- Затяните ручки.

Единая регулируемая подножка – регулировка положения ступней (С)

- Ослабьте болты (С) и установите желаемую позицию ступней.
- Затяните болты.

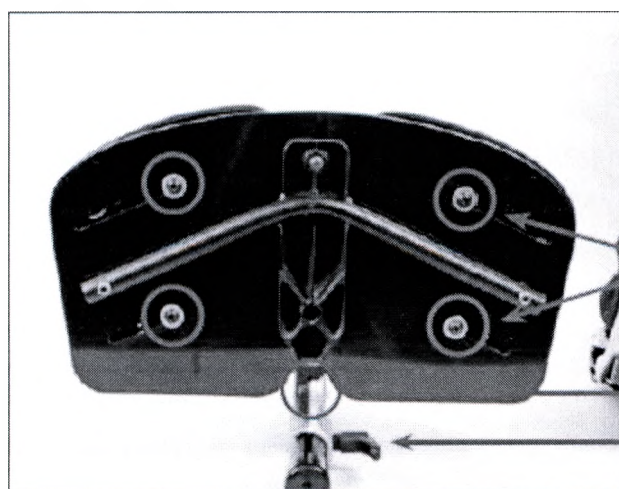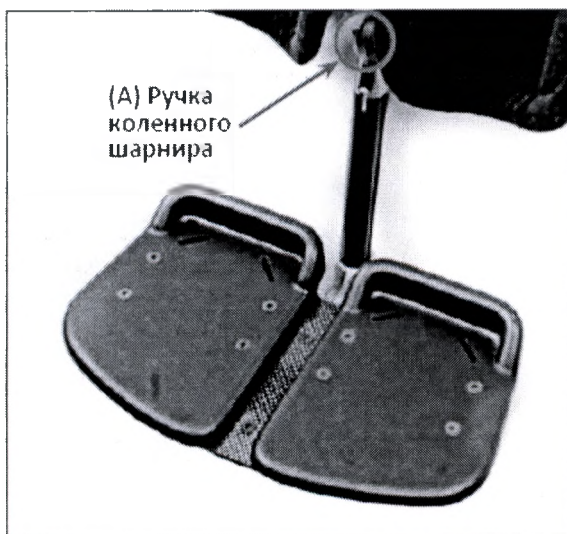


○ = Болты регулировки

(D) Регулировка единой подножки

(C) Регулировка угла наклона подножки

(B) Регулировка высоты

Раздельные регулируемые подножки

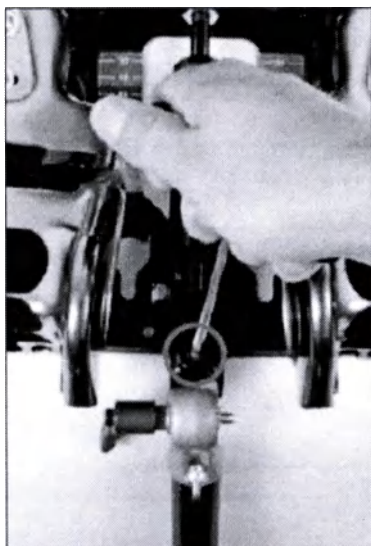

Крепление подножек

Регулировка коленного шарнира (А)

- Ослабьте болт (А) и установите нужное положение.
- Затяните ручку.

Раздельные регулируемые подножки – регулировка высоты (В)

- Ослабьте ручку (В) и установите подножку в нужное положение.
- Затяните ручку, зафиксировав желаемое положение.


Раздельные регулируемые подножки – регулировка положения ступней (С)

- Ослабьте болты (С) и установите нужное положение.
- Затяните ручки.




Регулировка подножки (D)

- Ширина и глубина подножки регулируется. Ослабьте болты (D) и установите подножку нужное положение.

(В) Регулировка высоты подножки

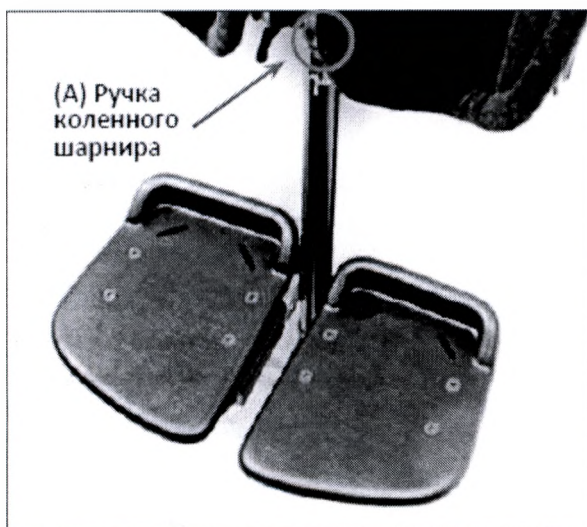

(А) Ручка коленного шарнира

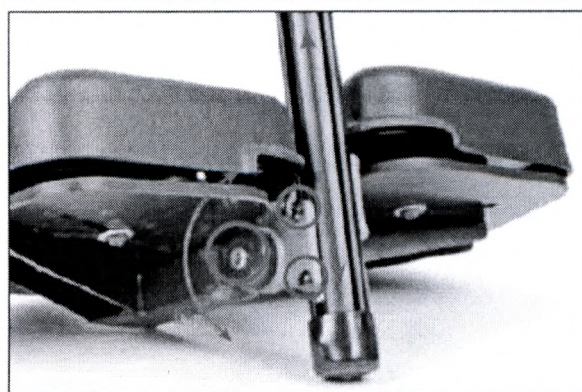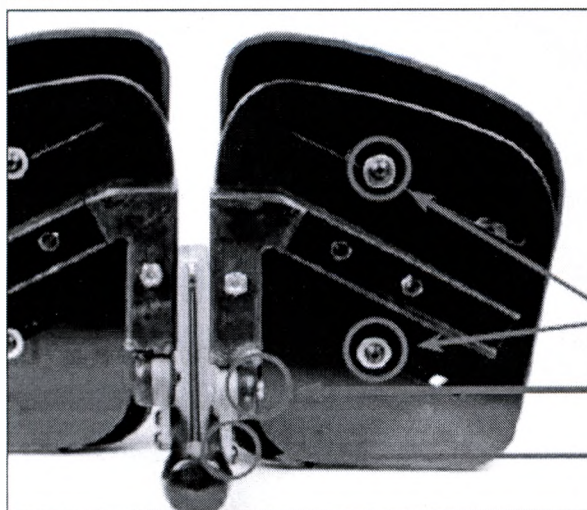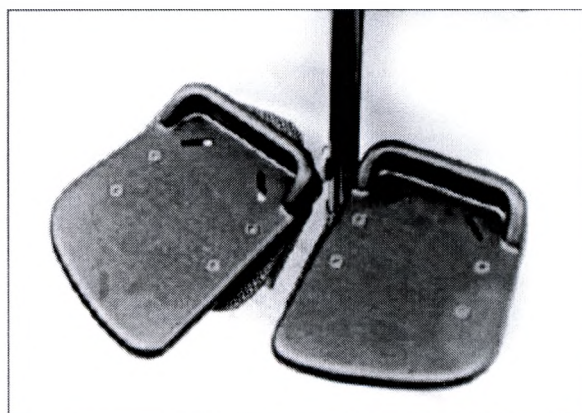

(D) Регулировка подножки

(C) Регулировка по углу наклона

(В) Регулировка высоты подножки

Откидные регулируемые подножки

Крепление подножки (А)

- Установите подножку в крепление подножки, сильно нажав на неё.
- Крепко закрутите болт после установки.

Регулировка по углу наклона, коленный шарнир (В)


Ослабьте болт крепления (В).

Установите желаемый угол наклона подножки.


Затяните болт (В).

Регулировка подножки по высоте (С)

- Ослабьте болт крепления (С).
- Установите нужную высоту подножки.
- Затяните болт (С).

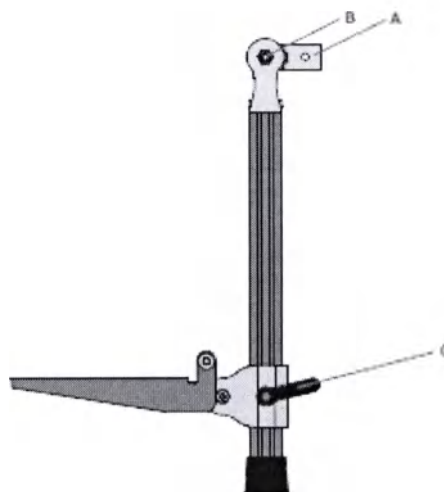

Адаптер для подножки на шарнирах

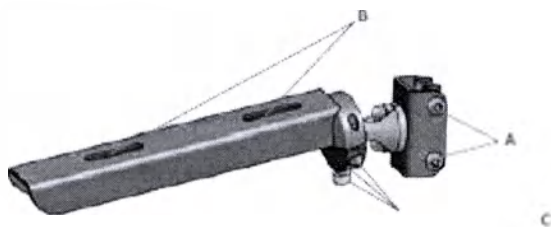

Регулировка высоты подножки

- Ослабьте болт крепления (А)
- Установите нужную длину подножки.
- Затяните болт.

Регулировка по глубине подножки (В)


- Ослабьте болт (В)
- Установите глубину подножки.
- Затяните болт.

Регулировка угла наклона подножки (С)

- Ослабьте болты (С) так, чтобы их можно было регулировать вручную.
- Установите желаемый угол наклона подножки.
- Закрутите болты (С)

Внимание! Для установки оптимально подвижности подножка должна быть направлена вниз.

Адаптер подвижной подножки

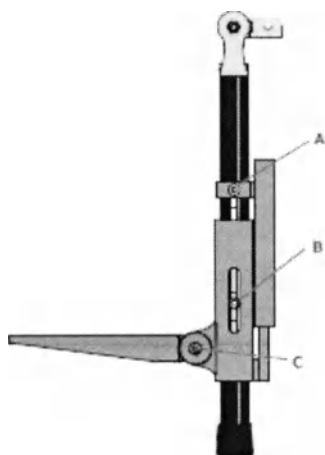

Гибкая подставка для ног

Коляска Zitzi Delfi Pro может быть оснащена подвижной подножкой, которая смягчает повышенный мышечный тонус и служит продолжением динамического сиденья.

Установка подвижной подножки

Выньте профиль подножки и установите данную опцию.

Подвижность (C)

Для полного диапазона гибкости и подвижности, болт (B) должен быть помещен снизу.

Регулировка по высоте


Ослабьте болты (B).

Регулировка угла наклона подножки

Ослабьте болт (C) и отрегулируйте необходимый угол наклона. Затем затяните болт.

Внимание! Для установки оптимально подвижности подножка должна быть направлена вниз.

Опора для икр

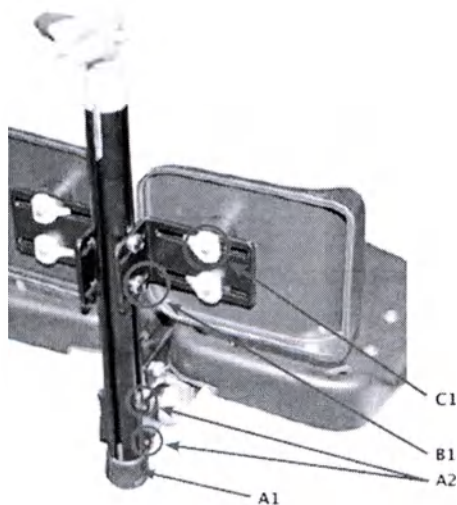

A1 - Снимите резиновые заглушки.

A2 - Ослабьте болты и снимите подножку.


B1 - Установите опору для икр на держатель подножки.

Установите в нужное положение и затяните болты.

C1 - Для регулировки ширины, ослабьте болт (C). Установите необходимую ширину и закрутите болт.

Проследите, чтобы наклейки фиксатора не переместились.

Фиксатор голеностопа

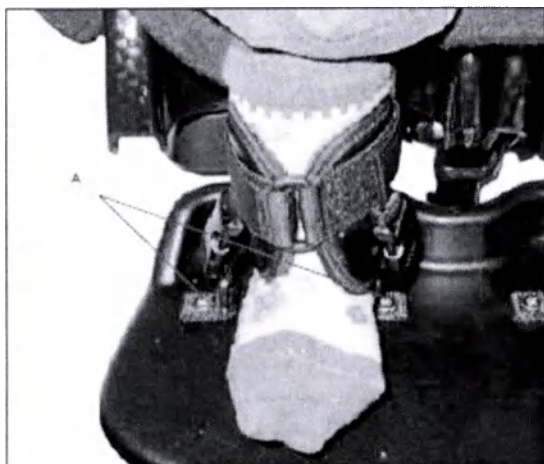


Установите фиксатор голеностопа в уже существующие гнёзда на подножке (А). Установите фиксатор голеностопа, зафиксируйте голеностоп и застегните его спереди на липучку. Затем отрегулируйте высоту фиксатора пряжками на обеих сторонах ступней.

Внимание! Проследите, чтобы накладки фиксатора не переместились.

Поддержка поясницы


- А) Снимите обшивку спинки.
- В) Установите поддержку поясницы при помощи липучек на место, обозначенное на спинке.
- С) Установите обшивку спинки.

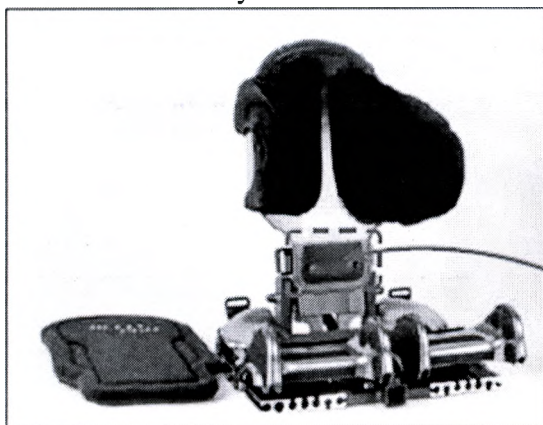


Поддержка поясницы

Ручка для сопровождающего

- A) Достаньте шестигранный ключ с верхней части профиля спинки (A).
- B) Вставьте направляющие ручки в пазы на профиле спинки (B2).
- C) Установите необходимое положение и затяните болты.

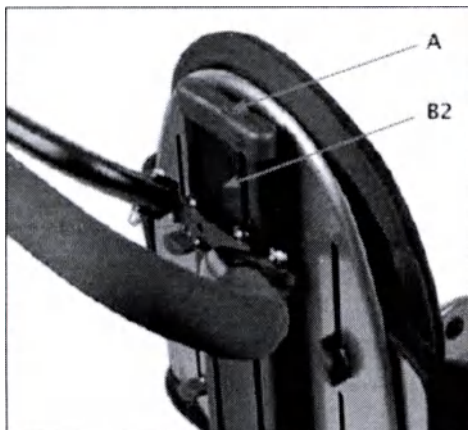

Система обогрева

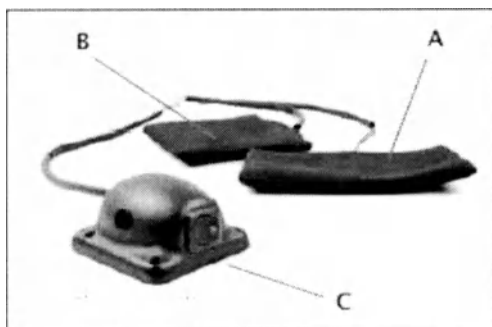

- A) Система обогрева
- B) Пластина для сиденья
- C) Аккумулятор и пульт управления

Система обогрева крепится к обшивке кресла липучками!

Система обогрева поддерживает постоянную температуру тела пользователя. При достижении нормальной температуры тела, система подогрева автоматически выключается. Если температура тела понижается, система активизируется снова, обогревая пользователя кресла-коляски.

Подголовник



(B) Ручка регулировки
высоты

Крепеж подголовника на
4 болтах (A)

A - Установка подголовника

Возьмите шестигранный ключ, встроенный в верхнюю часть профиля спинки.

Затем вставьте крепёж в нужное положение в пазы на профиле спинки. Затяните болты.

B - Установите подголовник в крепёж и отрегулируйте его индивидуально под пользователя. Закрутите болты. Затяните ручку.

C - Регулировка подголовника

Слегка ослабьте регулировочные болты так, чтобы вы смогли легко настроить подголовник вручную. Когда все регулировки будут успешно выполнены, затяните болты (C).


При необходимости регулировки высоты подголовника ослабьте ручку (B), установите нужную высоту и затяните ручку (B).

Мобиль


Крепеж мобиля должен быть установлен на профиле спинки. Замените существующие торцевые заглушки в верхней части профиля спинки на торцевые заглушки, которые идут в комплекте с мобилем. (Они просверлены для облегчения установки). Установите крепёж мобиля на задней части профиля спинки (D). Зафиксируйте крепёж на профиле спинки (C).

Установите мобиль, нажав на него, и зафиксируйте с помощью ручек (A).

Если вы устанавливаете крепёж подголовника, то он должен быть закреплён вместе с крепежом мобиля. Воспользуйтесь длинными винтами (B) и пружинной шайбой!

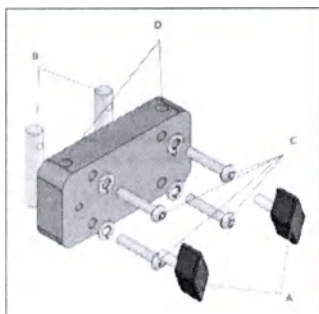

Капюшон

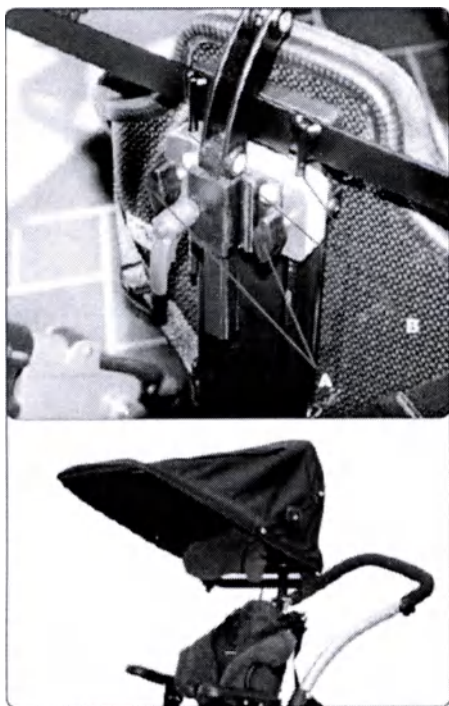

Капюшон устанавливается в тот же крепёж, что и мобиль. Они не могут быть установлены одновременно. Подголовник должен быть снят перед установкой капюшона.


Установка капюшона:

- Ослабьте ручки на обеих сторонах (А).
- Установите капюшон в крепёж (В).
- Затяните ручки (А).

Установка кресла на раму

Для установки кресла на пластину адаптера смотрите фото ниже.

Пластина крепится 4 болтами. Отрегулируйте перемещение пластины по глубине сиденья, затем затяните болты.

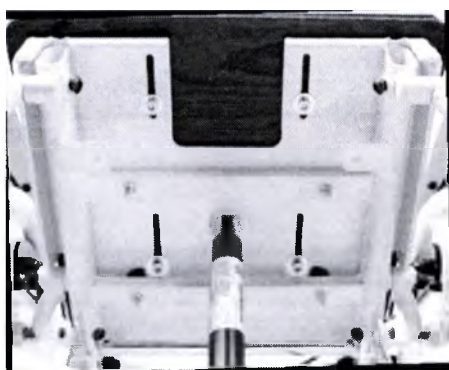

Система сиденья может быть легко установлена на раме с пластиной адаптера. Пластина идет в комплекте с 2 болтами, что позволяет ей не менять положение.

Установите систему сиденья, как показано на картинке. При её установке нажимайте до тех пор, пока не услышите щелчок. Затем затяните ручку по часовой стрелке под пластиной, чтобы убедиться, что кресло остается на своем месте.



Отверстия



Сдвиньте назад



Нажмите вниз



Ручка

Пластина адаптера: для установки на раму



Адаптер сиденья универсального размера: для установки на систему сиденья



Адаптерная система: адаптер сиденья + пластина адаптера




Порядок подготовки и эксплуатации для моделей кресел-колясок Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex (имеющих в составе рамы Flipper Pro, Flipper Pro Flex)

Регулировка высоты сиденья

Высота сиденья регулируется при помощи ручки.
При регулировке высоты, следует придерживать сиденье.

- Снимите блокировку высоты, нажав на ручку, отмеченную на рисунке.
- Настройте желаемую высоту сиденья.
- Отпустите ручку после того, как настроили положение сиденья.

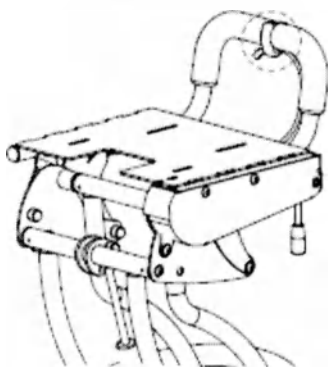

Регулировка угла наклона кресла

Угол наклона кресла регулируется от 0 ° до 30 °. Чтобы отрегулировать угол наклона, необходимо ослабить ручки, толкайте платформу сиденья вниз и вперед.

Чтобы восстановить угол наклона, отпустите ручки и потяните платформу сиденья вверх и назад, зажав рукоятку.

Пружины, расположенные с каждой стороны рамы Zitzi Flipper Pro, помогают устанавливать платформу сиденья в исходное положение.

Убедитесь, что угол наклона кресла зафиксирован.


Необходимо быть осторожными во избежание риска защемления.

Блокировка

Ручки должны быть заблокированы после выполнения настроек.

Наклон кресла


- Снимите фиксацию положение кресла, ослабив ручки с двух сторон.
- Отрегулируйте угол наклона кресла.
- Заблокируйте ручки после того, как вы достигните желаемого положения кресла.

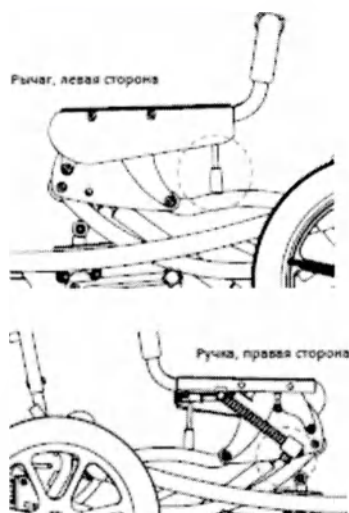

Ручка для сопровождающего лица

Установка ручки для сопровождающего лица

Ручка должна быть установлена между рамой и колёсами, как показано на рисунках.

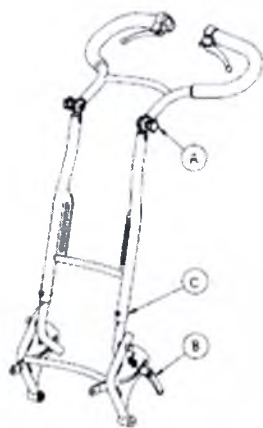

Угловое положение ручек

Для угловой регулировки ручек слегка ослабьте рукоятки (А) и настройте ручки в удобном положении. Затяните рукоятки (А) после регулировки.

Регулировка угла наклона ручки

Для угловой регулировки ручки для сопровождающего лица, слегка ослабьте болты (В) и настройте желаемый угол ручки. Затяните болты (В) после регулировки.

Регулировка высоты ручки

Ручка/ручки для сопровождающего лица могут менять положение высоты на разных уровнях. Слегка ослабьте болты (С). Настройте необходимую глубину ручки. Затяните болты (С) после регулировки.


Стояночный тормоз

Активация тормоза

Для фиксации тормоза в нужном положении нажмите на ручку тормоза и на красный фиксатор (А).

Снятие тормоза

Колёса автоматически разблокируются, если вы снова нажмете на ручку тормоза.

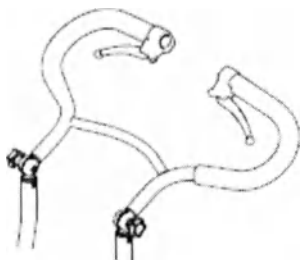


Установка колес и антипрокидывателя

Быстросъемные колеса



Задние колеса быстросъемными

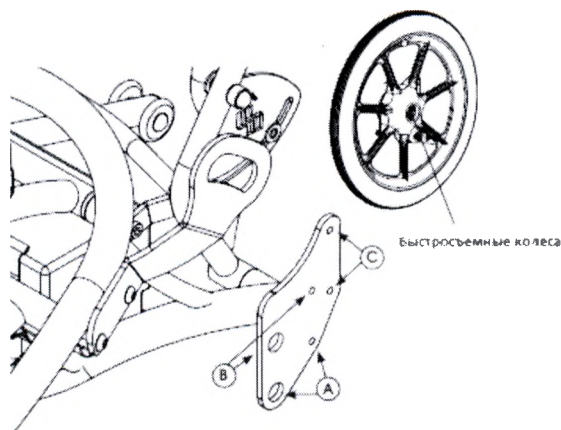

Снятие колёс


Нажмите и удерживайте кнопку в центре колеса, затем потяните колесо на себя.

Установка колёс

Нажмите и удерживайте кнопку в центре колеса, установите колесо. Когда оно окажется в необходимом положении, отпустите кнопку.

Убедитесь, что колесо зафиксировано!

Антипрокидыватели

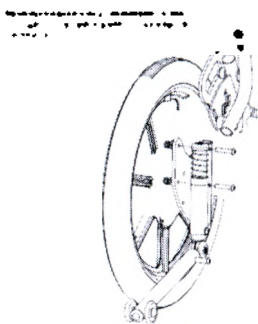


Антипрокидыватели при необходимости легко складываются. Нажмите на антипрокидыватель и поверните его. Если вы услышали щелчок, это значит, что антипрокидыватель занял свое положение.

Кронштейны для транспортировки


Установка ручки поддержки

Ручка поддержки устанавливается при помощи рукояток и болтов (А).

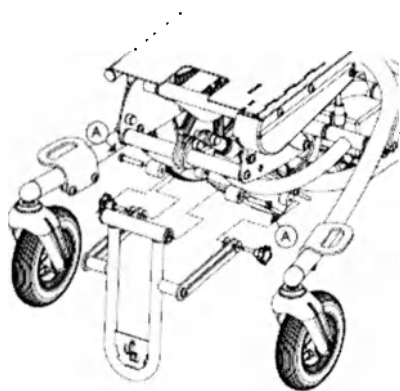

Установка задних и передних кронштейнов для транспортировки

Установите инструменты для транспортировки при помощи болтов, гаек и шайб так, как показано на рисунках. Обратите внимание, что скобы на задних крепёжных кронштейнах должны быть обращены назад.

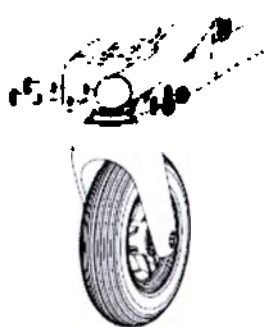

Передний кронштейн




Задний кронштейн

Регулировка ручки поддержки

Ослабьте рукоятки на обеих сторонах и вытяните ручку поддержки на необходимое положение.

Убедитесь, что рукоятки захватывают внешний край паза крепления ручки поддержки, затем затяните рукоятки.

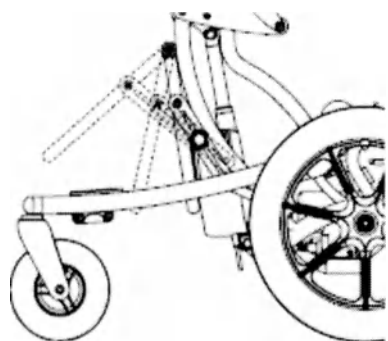


Ручка поддержки должна находиться в наиболее низком положении и опираться на пол во время транспортировки.

Установка кресла

Система сидения может быть легко установлена на раму Zitzi Flipper Pro с пластиной адаптера. Пластина идет в комплекте с 4 болтами, что позволяет ей оставаться на месте. Рукоятка под пластиной сиденья показывает, что система сиденья зафиксирована на месте.

Установите систему сиденья, как показано на рисунке. Нажимайте на нее до тех пор, пока не услышите щелчок. Затем затяните ручку под пластиной по часовой стрелке, чтобы убедиться, что кресло установлено.

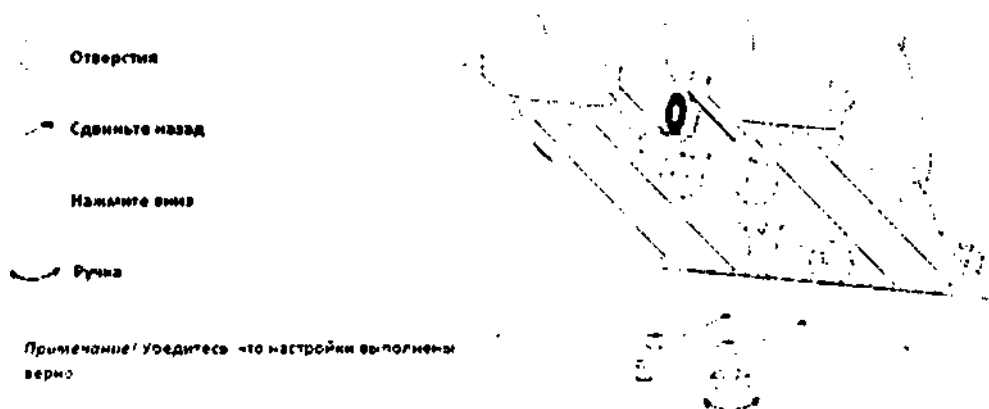

Порядок подготовки и эксплуатации для модели кресла-коляски Zitzi Delfi Pro Snapper


Порядок использования кресла Zitzi Delfi см. ранее, в соответствующем пункте.

Порядок подготовки и использования рамы Snapper (входящей в состав модели Zitzi Delfi Pro Snapper).

Платформа сиденья

Регулировка высоты

Чтобы снять блокировку позиции и отрегулировать высоту, нажмите на педаль (А), удерживая руку на ручке для толкания (В), и отпустите педаль, когда желаемая высота кресла будет достигнута.

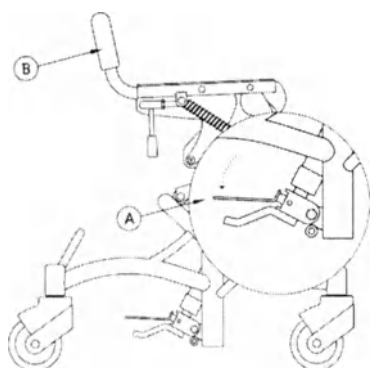

Внимание! Будьте осторожны во избежание защемления!

Угол наклона кресла

Чтобы отрегулировать угол наклона, ослабив пальчиковую ручку (А), нажмите на рукоятку (В) вперёд и толкните платформу сиденья вниз и вперед. Отпустите рукоятку (В), чтобы зафиксировать нужное расположение кресла, а затем затяните пальчиковую ручку (А), чтобы убедиться, что угол зафиксирован.

Примечание! Чтобы восстановить угол наклона, отпустите пальчиковую ручку (А), нажмите рукоятку и потяните платформу сиденья вверх и назад, удерживая ручку для толкания.

Пружинный возврат Пружина на стороне платформы сиденья помогает вернуть её в исходное положение. Внимание! Каждый раз, как вы настраиваете желаемый угол наклона кресла, убеждайтесь, что наклон кресла зафиксирован. После любых настроек пальчиковая ручка (А) должна быть зафиксирована.

Внимание! Будьте осторожны, во избежание риска защемления.

Ручка для толкания

Установка ручки


Вставьте ручку в цилиндрическую раму, как показано на рисунке. Затяните болты (А) после установки. Регулярно проверяйте, чтобы все болты были затянуты.

Внимание! Регулярно проверяйте, чтобы все болты были затянуты.

Регулировка ручки по глубине

Для того чтобы отрегулировать ручку для толкания по глубине, слегка ослабьте болты (А) и настройте желаемую глубину ручки. Затяните болты (А), как только произведете

необходимые настройки. Не забудьте затянуть болты (А) после того, как отрегулируете ручку для толкания.

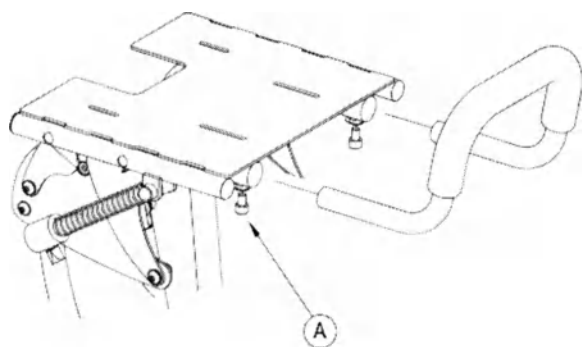

Ручка для сопровождающего лица

Установка ручки

Вставьте ручку в предназначенные на цилиндрической раме места. После установки затяните болты

Внимание! Всегда проверяйте, чтобы все болты были закручены.


Регулировка ручки по глубине

Для регулировки глубины ручки для сопровождающего лица, слегка ослабьте болты (А). Настройте необходимую глубину ручки. Затяните болты (А) после регулировки.

Регулировка ручки по углу Для угловой регулировки ручки для сопровождающего лица, слегка ослабьте болты (В) и настройте желаемый угол ручки. Затяните болты (В) после регулировки.

Угловое положение ручек Для угловой регулировки ручек, слегка ослабьте рукоятки (С) и настройте ручки в удобном положении. Затяните рукоятки (С) после регулировки

Внимание! Не забудьте надёжно затянуть болты и рукоятки после настройки положения ручки для сопровождения.

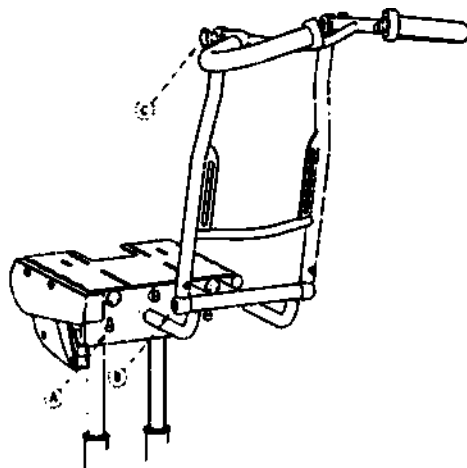


Стояночный тормоз

Использование стояночного тормоза

Ручка (А) между задними колесами имеет три режима, центральное положение (2) является нейтральным. Для блокировки колёс в данном положении коляски, нажмите на ручку вниз в положение (3) – движение колёс и их направление будут заблокированы. Снимите блокировку, подняв хромированную ручку (В) в позицию (2) - ручка вернётся в нейтральное положение.

Фиксация направления движения колёс

Ручка (А) между задними колёсами имеет три режима, центральное положение является нейтральным. Чтобы активировать блокировку направления движения колёс, поднимите хромированную ручку (В) в верхнее положение (1). Чтобы снять блокировку направления движения колёс, нажмите на ручку (А) на один шаг вниз, тогда ручка (А) снова приобретет нейтральное положение (2).

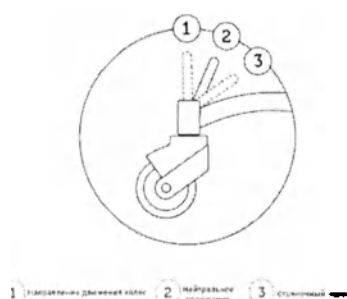

Адаптер сиденья и пластина адаптера



Установка сиденья на раму

Существует несколько способов установки кресла на раму. Выберите способ, наиболее удобный для вас


Установка при помощи системы адаптера

Система адаптера позволяет легко устанавливать кресло на различные рамы. Система адаптера состоит из адаптера сиденья в кресле и пластины адаптера на раме. 1) Присоедините пластину адаптера к раме при помощи прилагаемых болтов, шайб и гаек. 2) Затем установите адаптер сиденья, передвинув направляющие в крайних пазах снизу кресла. Затяните болты, когда достигните желаемого положения. 3) Когда адаптер сиденья и пластина адаптера встанут на свои места, их можно будет соединить. Система адаптера будет надежно зафиксирована, когда вы услышите щелчок.

Внимание! Перед использованием убедитесь, что кресло надёжно зафиксировано на раме.

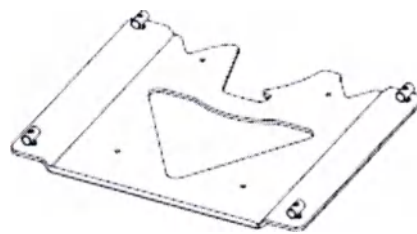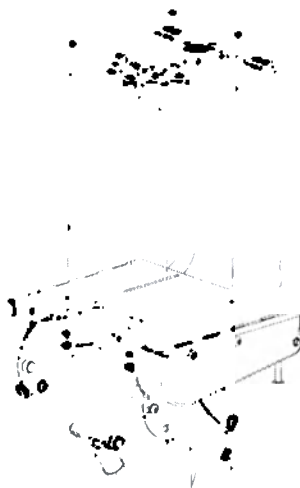

Адаптер сиденья
крепится к сиденью

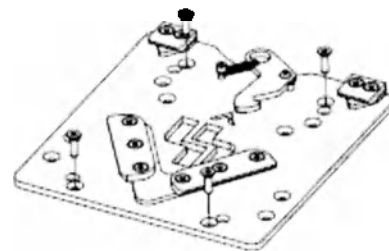

Пластина адаптера
крепится к шасси

Порядок подготовки и эксплуатации для модели Zitzi Delfi Pro Pengy

Особенности эксплуатации кресла Zitzi Delfi Pro описаны ранее.
Ниже приводятся рекомендации по эксплуатации рамы Pengy.

Система складывания и раскладывания рамы


Раскладывание

Рама легко складывается и раскладывается. Потяните оба фиксатора (А) вверх так, как показывают стрелки на картинке. Чтобы разложить раму, потяните за ручку для сопровождающего лица. Вы услышите щелчок, когда рама примет вертикальное положение.

Внимание! Будьте осторожны, во избежание риска защемления.

Складывание


Потяните фиксаторы (А) вверх, как показывают стрелки. Сложите вниз ручку для сопровождающего. Вы услышите щелчок, когда рама будет зафиксирована в сложенном положении.

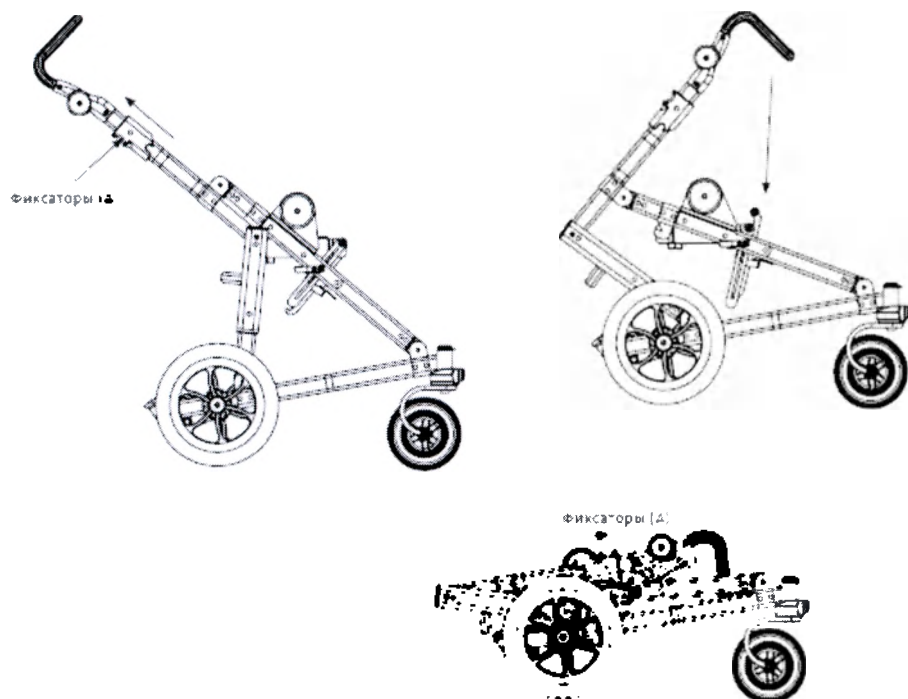

Тормоза


Колёса оснащены стояночными тормозами, которые могут быть активированы сопровождающим лицом. Для блокировки колёс, нажмите на педаль тормоза (А). Для разблокирования колёс, поставьте ногу под педаль и потяните вверх.

Внимание! Всегда блокируйте колёса коляски на наклонной поверхности.

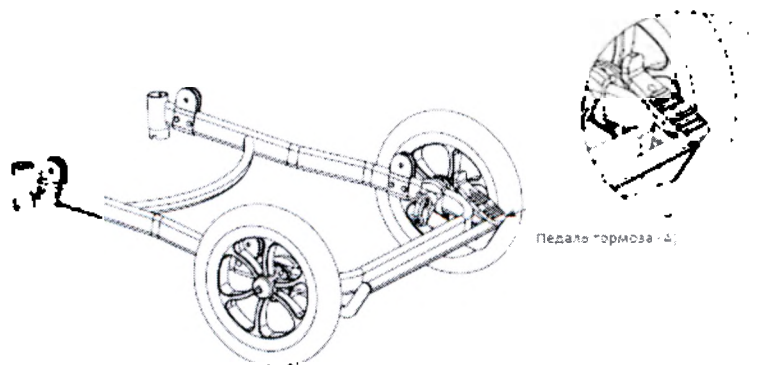

Фиксация колёс по направлению движения


Поверните фиксирующую ручку налево, чтобы зафиксировать передние колёса для движения по прямой. Вы услышите щелчок, когда колёса заблокируются. Для разблокирования поверните фиксирующую ручку направо.

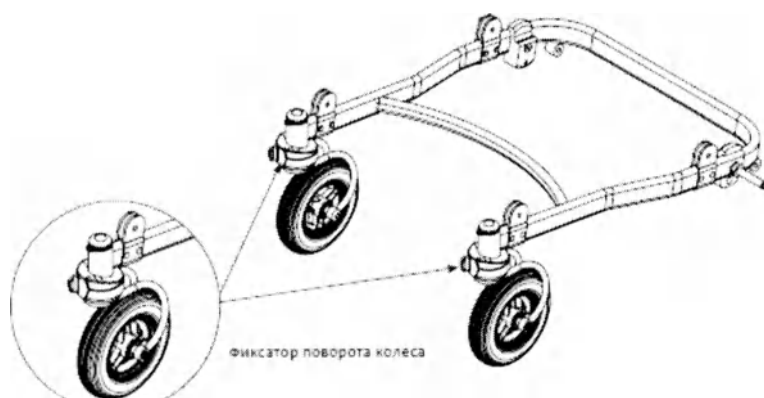

Регулировка угла наклона кресла

Чтобы настроить угол наклона кресла, установленного на раме, ослабьте фиксирующую направляющую (А), расположенную на правой стороне. Поднимите красный активирующий рычаг (В), расположенный на левой стороне, настройте угол наклона до необходимой позиции.


Угол наклона фиксируется автоматически. Затяните фиксирующую направляющую (А).

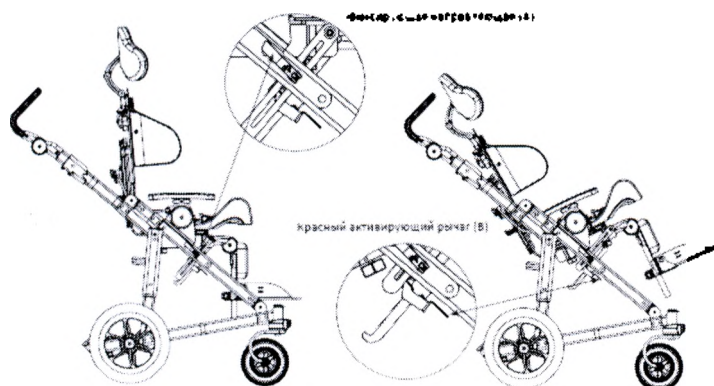

Ручка для сопровождающего

Регулировка угла наклона ручки

Чтобы отрегулировать угол наклона ручки для сопровождающего лица, одновременно нажмите обе кнопки (А), расположенные на внутренней поверхности ручки. Установите ручку в необходимое положение. Ручка блокируется автоматически.

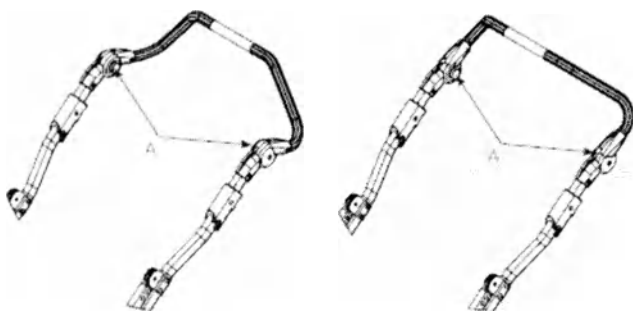

Установка кресла Delfi Pro

Установка кресла на адаптер сиденья с последующей фиксацией


Установите Delfi Pro на пластину адаптера. Установите прилагаемые болты как показывает изображение. Передвиньте нижний профиль на направляющие и, настроив необходимую позицию, затяните болты (А). Система сиденья легко и надежно крепится к раме при помощи пластины адаптера. Поместите пластиковые крепления (D) в пазы и убедитесь, что они надёжно зафиксированы.

Кронштейн Anatomic Sitt и другие адаптеры сидений

Пазы (Е) предназначены для монтажа адаптеров сиденья и кресел Anatomic Sitt. Чтобы ослабить адаптер сиденья, поверните штифт (В) на четверть оборота.

Примечание!


Штифты всегда должны быть заблокированы, когда кресло используется.

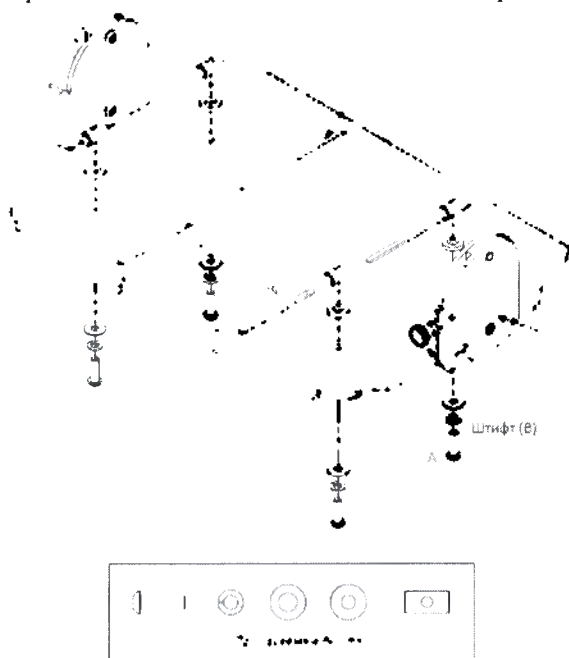

Порядок подготовки и эксплуатации для модели Zitzi Delfi Pro Guppy

Особенности эксплуатации кресла Zitzi Delfi Pro описаны ранее. Ниже приводятся рекомендации по эксплуатации рамы Guppy.

Установка платформы сиденья на раму Gurru

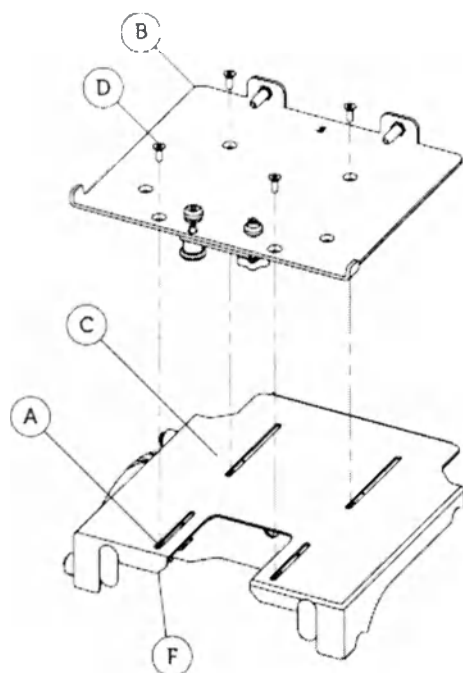


Адаптер сиденья кресла легко монтируется на раме при помощи четырех (4) болтов, шайб и гаек, которые крепятся в пазах (А) на пластине адаптера рамы.

Поместите адаптер сиденья кресла (В) на пластину адаптера рамы (С) и закрепите прилагаемым болтом (D). Закрутите с другой стороны пластины адаптера гайкой и шайбой (F). Крепко затяните болты (D).


Наклон кресла

Регулировка наклона кресла

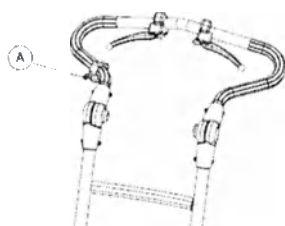

Чтобы отрегулировать угол наклона, нажмите на ручку регулировки (А) и двигайте ручку для сопровождающего лица вверх или вниз. Отпустите ручку регулировки (А), чтобы зафиксировать нужное расположение кресла.

Чтобы вернуть угол наклона в исходное положение, нажмите на ручку регулировки (А) и потяните ручку для сопровождающего вверх или вниз.

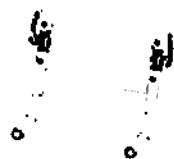

Внимание! Будьте осторожны во избежание защемления пальцев.

Внимание! Будьте осторожны во избежание опрокидывания кресла-коляски во время регулировки угла наклона кресла.

Подлокотники

Установка подлокотников на раму

Ослабьте болты (А) с обеих сторон рамы. Поместите крепление подлокотников между ручками для сопровождающего лица. После установки подлокотников затяните болты (А).

Регулировка высоты

Ослабьте болты (А) и установите подлокотник на нужную высоту, затем затяните болты (А).


Регулировка ширины

Ослабьте болт (В), а затем установите подлокотник в нужное положение и затяните болт (В).

Также вы можете отрегулировать угол наклона в креплении подлокотников. Для этого ослабьте болты (А) и отрегулируйте угол наклона подлокотников.

Регулировка глубины

Ослабьте болты (С) и установите необходимое положение подлокотников, используя отверстия снизу.

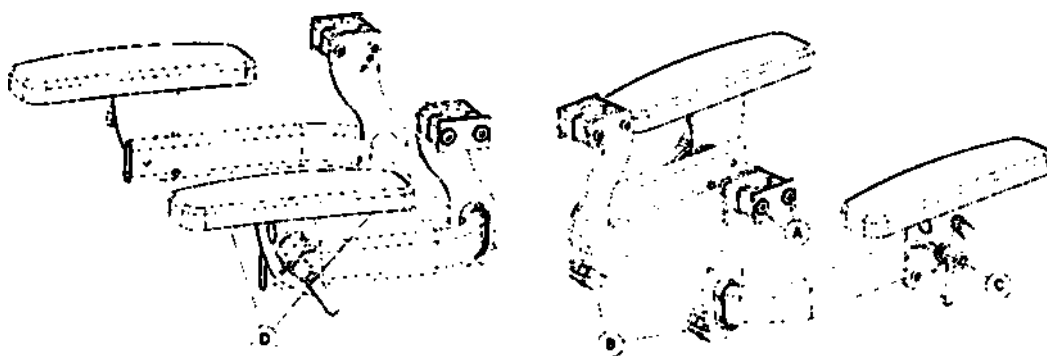

Ручка для сопровождающего лица

Установка ручки для сопровождающего лица

Вставьте ручку в предназначенные на цилиндрической раме места (А). После установки затяните болты (В) – выберите одну из четырех позиций для болтов.

Регулировка ручки по глубине

Слегка ослабьте болты (В) под платформой сиденья. Установите необходимую глубину ручки. Затяните болты (В) после регулировки.

Внимание! Болты должны крепиться в одной из четырёх позиций на ручке для сопровождающего лица.

Регулировка ручки по углу


Регулировка ручки по углу зависит от кресла, которое вы используете. Для угловой регулировки ручки для сопровождающего лица, слегка ослабьте рукоятки регулировки (С) и настройте желаемый угол ручки. Затяните рукоятки (С) после регулировки.

Угловое положение ручек

Нажмите на кнопки (D) с внутренней стороны ручки для сопровождающего лица и закрепите их в удобном положении. Отпустите кнопки (D) после регулировки.

Складная ручка

Ослабьте рукоятки регулировки (С) и отрегулируйте ручку для сопровождающего лица в положении от себя/на себя. Зафиксируйте рукоятки (С).

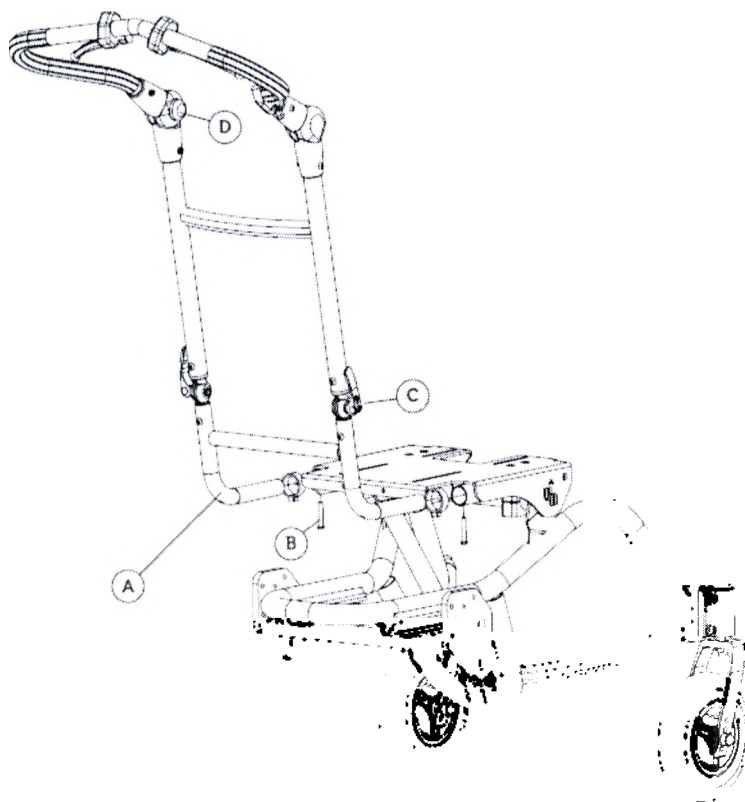

Быстросъемные колёса

Установка быстросъемных колёс


Колёса могут быть легко сняты с рамы. Данная функция значительно облегчает транспортировку кресла-коляски.

Для этого нажмите и удерживайте кнопку (B) в центре колеса, установите колесо (A). Когда оно окажется в необходимом положении, отпустите кнопку (B).

Внимание! Убедитесь, что колёса надежно установлены!

Снятие колёс

Нажмите и удерживайте кнопку (B) в центре колеса, потяните колесо на себя.

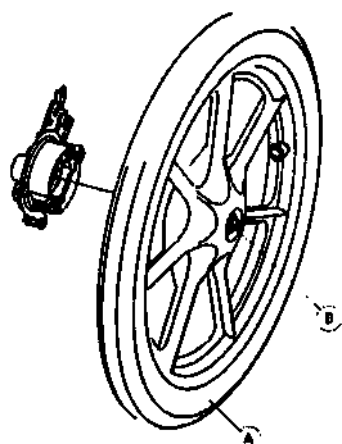

Задние колёса

Расположение колёс

В зависимости от кресла, находящегося на раме, вы можете регулировать расположение задних колёс по горизонтали для наилучшего баланса рамы.


Для регулировки положения заднего колеса по горизонтали, открутите четыре болта (А) под осью колеса и выберите крепёжное отверстие для установки задних колёс на раму и регулировки требуемой глубины. Убедитесь, что колёса установлены в одинаковые отверстия с обеих сторон рамы.

Колёса 40 см устанавливаются в крепёжные отверстия В+С.

Колёса 50 см, 55 см и 60 см устанавливаются в крепёжные отверстия D+E.

Внимание! Изменение расположения задних колёс может спровоцировать опрокидывание кресла-коляски. Возможно, вам понадобится отрегулировать положение передних колёс.

Внимание! Болты следует лишь слегка ослабить. Запрещается откручивание и снятие болтов.

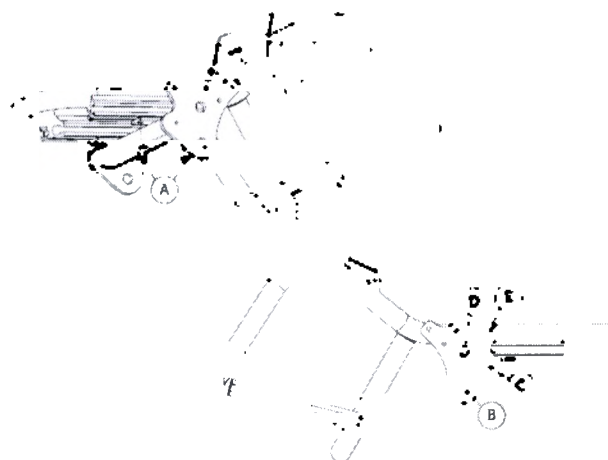

Передние колёса

Установка передних колёс

Вставьте направляющую (А) в раму, как показано на рисунке. Затем установите вилку переднего колеса (К) при помощи болта (В), шайбы (Н) и гайки (D), затяните болт.


Установка переднего колеса в вилку

Установите переднее колесо (F) в одну из пяти позиций с помощью вилки переднего колеса (К), оси колеса (G), шайбы (Н) и фиксирующей гайки (I).

Поместите переднее колесо (F) в вилку (К). Вставьте ось (G) вместе с шайбой (Н) в одно из пяти предусмотренных отверстий в вилке, затем вставьте в отверстие колеса и в отверстие вилки на противоположной стороне. С обратной стороны добавьте шайбу (Н) и фиксирующую гайку (I), затяните. В конце установки закрепите заглушки (J) на фиксирующих гайках с обеих сторон. Смотрите рисунок ниже.


Расположение передних колёс

Для балансировки кресла-коляски вы можете

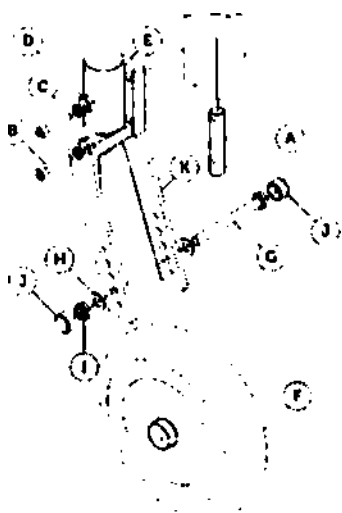

настроить передние колёса в 5 положениях по высоте (по вертикали). Это позволяет вам регулировать высоту передних колёс после установки задних колёс.

Внимание! Обязательно убедитесь, что все болты надёжно закручены после совершения настроек.

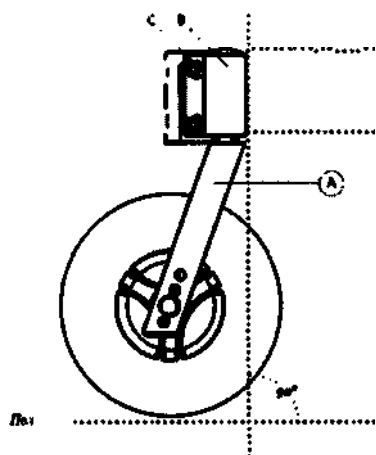

Расположение вилки переднего колеса

Возможно, вам понадобится изменить положение вилки переднего колеса, если возникнут трудности с перемещением кресла-коляски. Такая ситуация также может возникнуть, если вы регулируете расположение переднего колеса без регулировки вилки (A).

Убедитесь, что крепление переднего колеса (B) расположено под прямым углом к поверхности земли, как показано на рисунке.


Угол наклона вилки переднего колеса

Ослабьте гайки на креплении переднего колеса (B) и поворачивайте их пока не скорректируете угол наклона вилки переднего колеса.

Затяните болты после установки угла вилки.

Внимание! Обязательно убедитесь, что все болты надёжно закручены после совершения настроек.

Подetailная схема барабанного тормоза

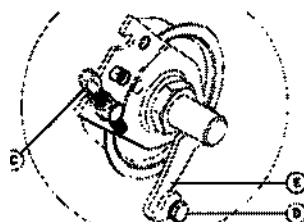

Подetailная схема барабанного тормоза

Барабанный тормоз

Колёса оснащены барабанными тормозами, которые могут активироваться сопровождающим лицом. Всегда проверяйте исправность тормозов перед использованием кресла-коляски.

Нажмите на правую ручку тормоза (A) и толкните кресло-коляску вперед. Не следует нажимать на ручку тормоза до предела. Оставьте зазор в 5-10 мм между ручкой тормоза и ручкой для сопровождающего лица.

Повторите процедуру для левой ручки тормоза.

Активация тормоза

Потяните ручку тормоза (А) пальцами на себя и нажмите на красный фиксатор (В) для фиксации тормоза в нужном положении.


Снятие тормоза

Колёса автоматически разблокируются, если вы потяните ручку тормоза (А) на себя. Затем отпустите ручку тормоза.

Проверка тормоза

Зажмите ручку тормоза и толкните кресло-коляску вперёд. Если барабанные тормоза колёс настроены правильно, рама не должна сдвинуться с места. Если тормоз не работает, то проверьте натяжение обоих тормозных проводов. Если провод плохо натянут, ослабьте болт (С), чтобы увеличить натяжение. Если этого недостаточно, ознакомьтесь с кратким руководством по настройке провода, которое представлено ниже.

- 1) Закрутите болт (С) в его нижнем положении.
- 2) Ослабьте гайку (D).
- 3) Надавите на тормоз, подняв рычаг барабанного тормоза (Е), и переместите гайку (D) далее вверх по проводу.
- 4) Затяните гайку (D) и настройте натяжение с помощью болта (С).

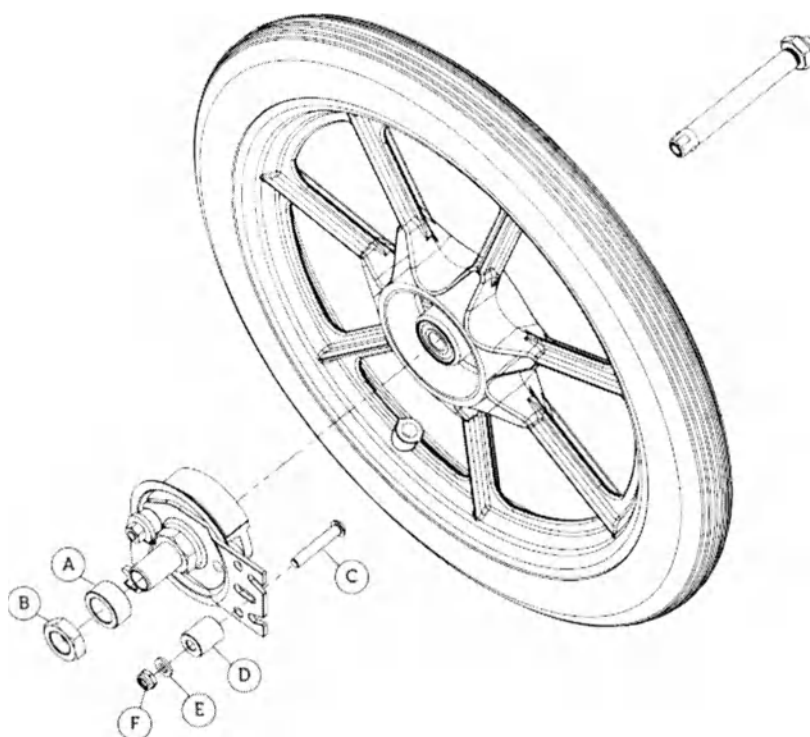

Установка барабанного тормоза

Стояночный тормоз


Установка стояночного тормоза (ручного тормоза)

Установка крепления стояночного тормоза должна производиться в соответствующее отверстие на одной из сторон рамы при помощи болтов (А), шайб (В) и гаек (С), как показано на рисунке ниже.

При необходимости отрегулируйте стояночный тормоз (D): ослабьте болты (E), а затем двигайте тормоз вперед и назад в пазу. Затяните болты (E), когда необходимое положение будет настроено.

Использование стояночного тормоза

Активируйте стояночный тормоз (D), нажав на ручку тормоза вперед. Потяните ручку назад чтобы снять стояночный тормоз.

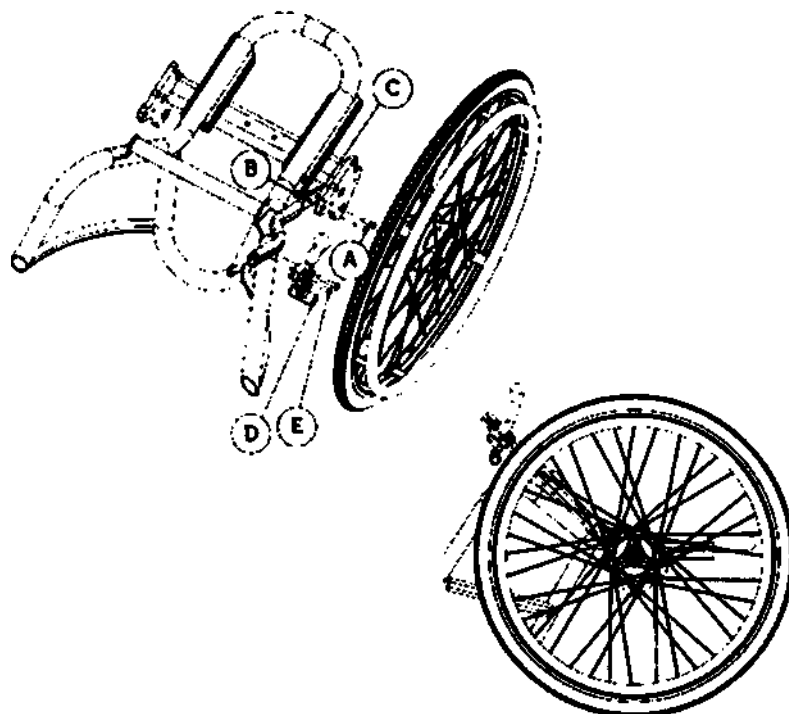

Подножки

Монтаж подножки

Вставьте крепления подножек (A) в передние отверстия под платформой сиденья.

Регулировка возможна в двух положениях глубины. Затяните болты (B) на обеих сторонах с помощью шайб и гаек (C).

Внимание! Прежде чем установить подножки, снимите заглушки с платформы сиденья. Тогда вы сможете легко поместить крепления подножек в отверстия.

Ограничитель


Ограничитель (D) в виде направляющей установлен в нижней части подножки и находится внутри заглушки. Ограничитель также может быть использован для возврата в исходное положение по высоте.

Внимание! Установите дополнительный ограничитель над подножкой на опоре подножки для того, чтобы легко возвращать её в альтернативное положение по высоте (например, если вы в обуви или без неё).

Регулировка подножки


Когда подножка устанавливается на раму, можно отрегулировать угол подножки в колене. Ослабьте болты (E) и отрегулируйте необходимый угол, затем затяните болты (E).

Регулировка высоты подножки

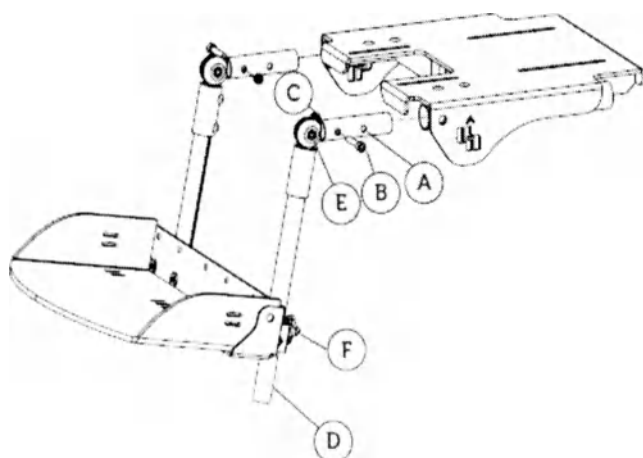

Когда подножка устанавливается на раму, можно отрегулировать высоту подножки. Ослабьте рычаг рукоятки (F) и настройте желаемую высоту, затем затяните рычаг ручки (F).

Опора для икр

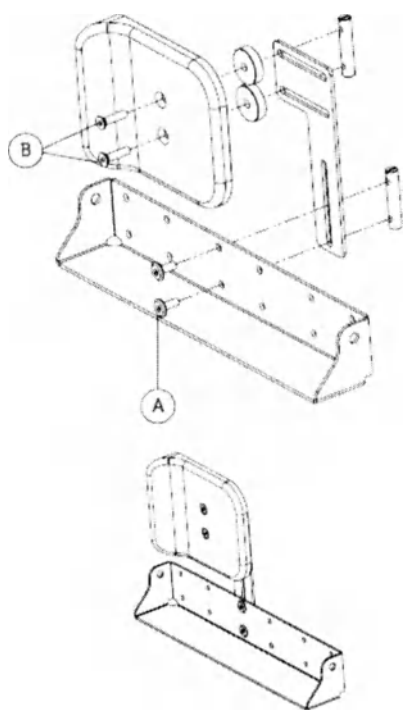

Установка

Установите опору для икр в крепление подножки как показано на рисунке при помощи болтов и направляющих, которые идут в комплекте.


Регулировка высоты

Слегка ослабьте болты (A) и установите нужную высоту, затем затяните болты (A).

Регулировка ширины

Немного ослабьте болты (B) и установите желаемую ширину, затем затяните болты (B).

Антипрокидыватели

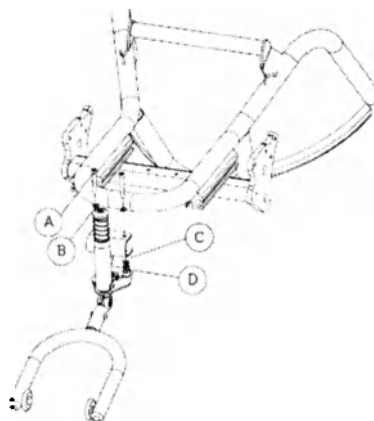

Установка антипрокидывателя

Установите антипрокидыватели на ось колеса, как показано на рисунке, при помощи укомплектованных болтов (А), шайб (В), гаек (С) и заглушек (D).

Вставьте болты (А) в отверстия на креплении антипрокидывателя через отверстие в раме и закрепите их на обратной стороне с помощью шайб и гаек. Затяните болты и поместите заглушки.

Внимание! Рама Zitzi Gypsy всегда должна быть укомплектована антипрокидывателями в связи с множеством возможностей регулировок.


Использование антипрокидывателей

Антипрокидыватели следует применять для безопасности использования рамы. Они легко складываются. Когда вы не используете антипрокидыватели, вы можете легко отвести их в сторону. Нажмите на антипрокидыватель и поверните его. Если вы услышали щелчок, это значит, что антипрокидыватель занял правильное положение.

Порядок подготовки и работы для модели Zitzi Delfi Pro Seabass Pro

Особенности эксплуатации кресла Zitzi Delfi Pro описаны ранее.
Ниже приводятся рекомендации по эксплуатации рамы Seabass Pro.

Установка платформы сиденья

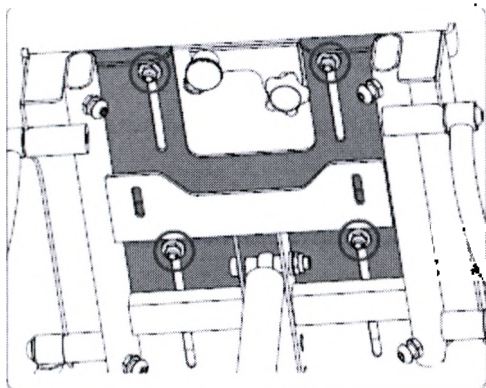


Выберите платформу сиденья в соответствии с моделью кресла.

Отрегулируйте платформу по глубине и затяните ее четырьмя болтами.

Примечание. Отрегулируйте сиденье таким образом, чтобы коляска была хорошо сбалансирована.


Регулировка глубины сиденья

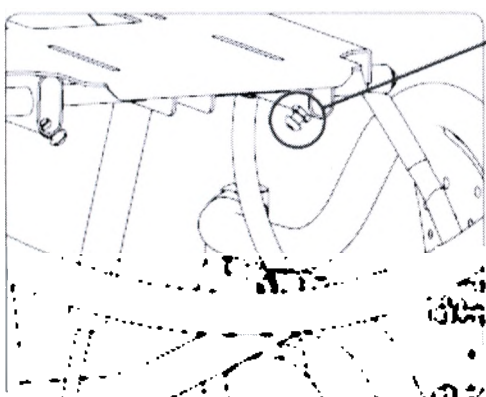

A

Для того, чтобы коляска была хорошо сбалансирована, можно настроить ручку для сопровождающего лица по глубине.

При правильном балансе управлять коляской легче. А - Ослабьте болты на каждой стороне, настройте положение ручки и затяните болты.


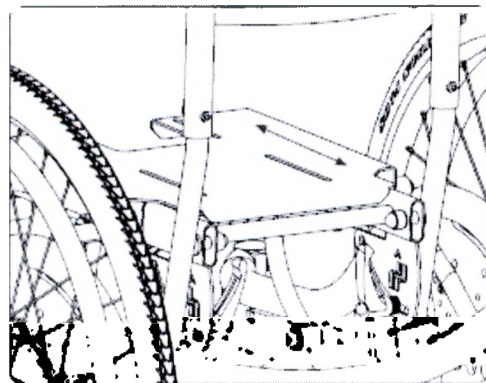


Обратите внимание, что болты нужно лишь слегка ослабить!

Внимание! Оставьте не менее 5 см ручки для крепления в трубе!

Регулировка угла наклона кресла


Нажмите на ручку откидывания (А) и отрегулируйте угол наклона.
Будьте осторожны во избежание защемления пальцев!

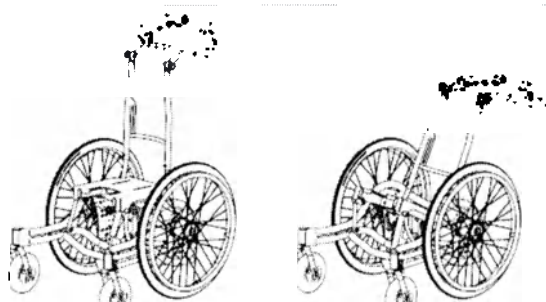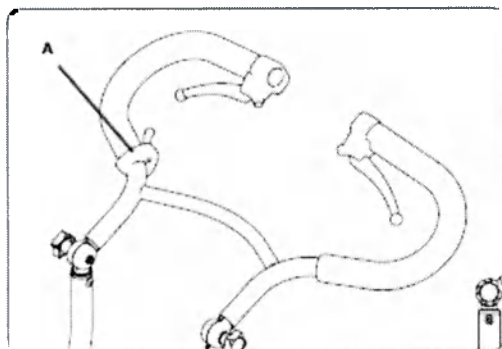


Регулировка ручки для сопровождающего лица

Ручка для сопровождающего лица подходит к различным креслам, поэтому ее можно легко использовать с любым креслом. Ослабьте болты (А), отрегулируйте, затяните болты (А).

Ручка для сопровождающего лица должна опираться на кресло для транспортировки в автомобиле.

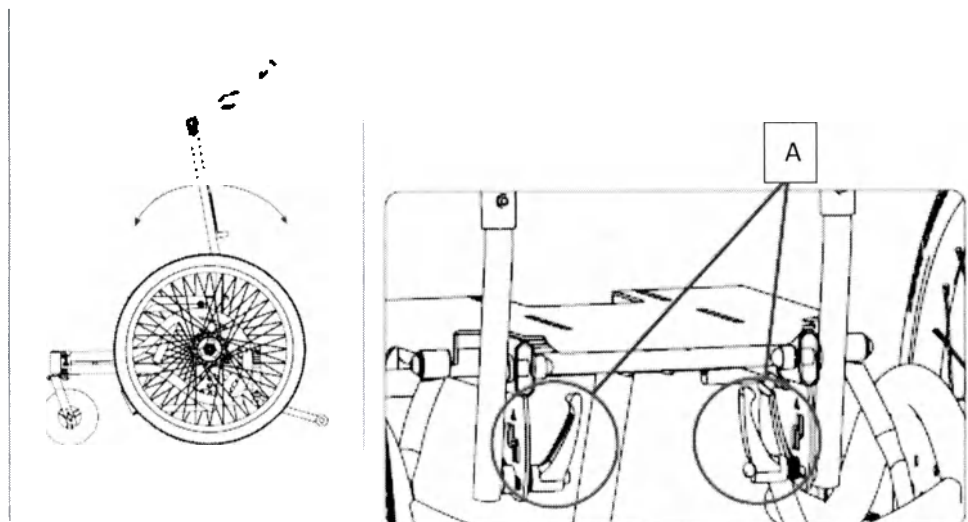

Расположение колёс

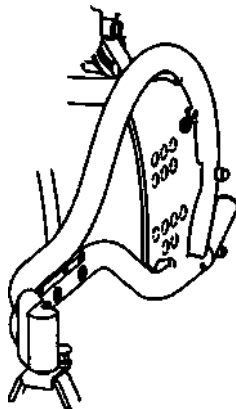


Для наилучшего баланса рамы вы можете отрегулировать расположение колёс по горизонтали. Выберите крепежное отверстие для установки задних колёс рамы.

Пожалуйста, обратите внимание, что изменение положения задних колёс может спровоцировать опрокидывание кресла-коляски. Возможно, вам понадобится отрегулировать положение передних колёс.

Передние колёса

Для балансировки кресла-коляски вы можете установить передние колёса в одно из четырёх положений по вертикали.

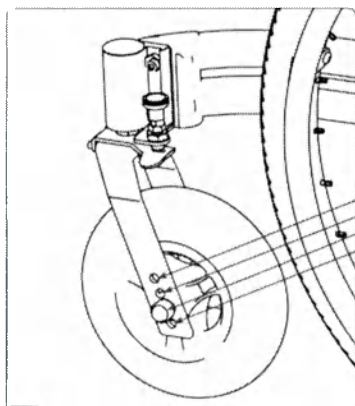


Четыре положения по высоте (по вертикали)

Угол наклона вилки передних колёс

Чтобы изменить угол наклона вилки, ослабьте болты и отрегулируйте муфту (А).

Примечание: убедитесь, что вы туго затянули болты!

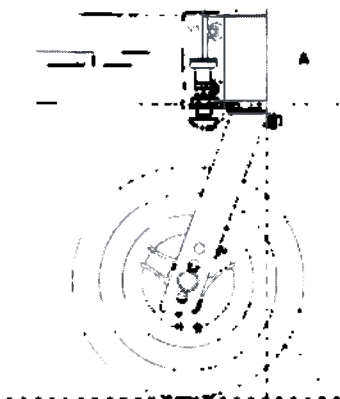


Ручка для сопровождающего лица



Для регулировки угла наклона ручки для сопровождающего лица вам необходимо открутить ручки, обозначенные на рисунке красным цветом. Установите необходимый угол наклона и закрутите ручки.


Ручка для сопровождающего лица должна опираться на спинку кресла-коляски во время транспортировки в автомобиле. Убедитесь, что ручки надёжно зафиксированы!

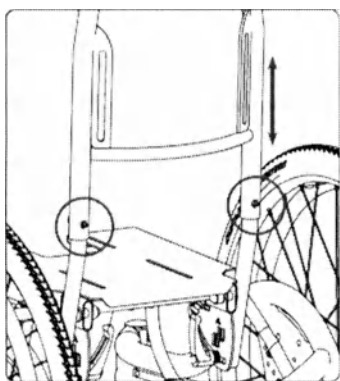

Регулировка высоты ручки для сопровождающего лица

Высота ручки для сопровождающего лица может быть отрегулирована в трёх положениях. Области, обозначенные красным цветом, показывают, как ручка регулируется по высоте. Убедитесь, что после настройки необходимой высоты вы надёжно затянули болты.

Складная ручка для сопровождающего лица

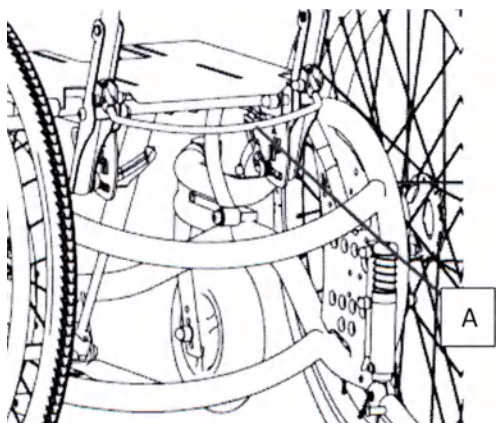

Принадлежность — складная ручка для сопровождающего лица.

Чтобы сложить ручку, вам необходимо:

Нажать на рычаг (А) вниз для складывания.

Чтобы установить ручку в исходное положение:

Вам нужно потянуть ручку вверх до тех пор, пока не услышите щелчок.

Щелчок означает, что ручка для сопровождающего надёжно зафиксирована.

Важно! Убедитесь, что вы зафиксировали ручку для сопровождающего после ее регулировки.

Проверьте надёжность крепления!

Барабанный тормоз

Колёса оснащены барабанными тормозами, которые могут активироваться сопровождающим лицом.

Активация тормоза

Зажмите ручку тормоза и нажмите на красный фиксатор (А) для фиксации тормоза в нужном положении.

Снятие тормоза

Колёса автоматически разблокируются, если вы потяните ручку тормоза.


Проверка тормоза

Толкая вперед кресло-коляску, зажмите ручку тормоза. Если барабанные тормоза колёс работают правильно, рама не должна сдвинуться с места.

Если тормоза не работают

Проверьте натяжение обоих тормозных проводов. Если провод слабо натянут, отрегулируйте гайку (В), чтобы увеличить натяжение. Если этого недостаточно, ознакомьтесь с кратким руководством по настройке провода ниже.

- Установите регулировочную гайку (В) в нижнее положение.
- Ослабьте гайку (D).
- Нажмите ручку тормоза.
- Затяните гайку (D).

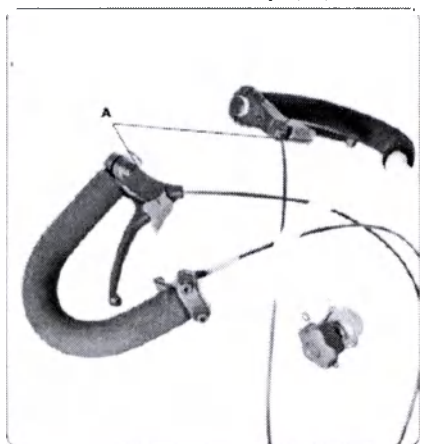

Быстросъемные колеса



Колёса могут быть легко сняты с рамы. Данная функция значительно облегчает транспортировку кресла-коляски.

Снятие

Нажмите и удерживайте кнопку в центре колеса. Снимите колесо.


Замена колеса

Нажмите и удерживайте кнопку в центре колеса. Поместите ось колеса в отверстие барабанного тормоза. Когда колесо окажется в необходимом положении, отпустите кнопку.


Примечание. Не нажимая кнопку, потяните колесо вверх. Если оно осталось неподвижным, настройки установлены правильно.

Подлокотник, установленный на сиденье

1. Установите профиль подлокотников с двумя болтами (А), шайбами и гайками (В).
2. Вставьте болт снизу, а шайбами и гайками туго затяните болт.
3. Ослабьте болты (С) с обеих сторон.
4. Установите подлокотник в профиль, который вы уже установили.
5. Туго затяните все болты!

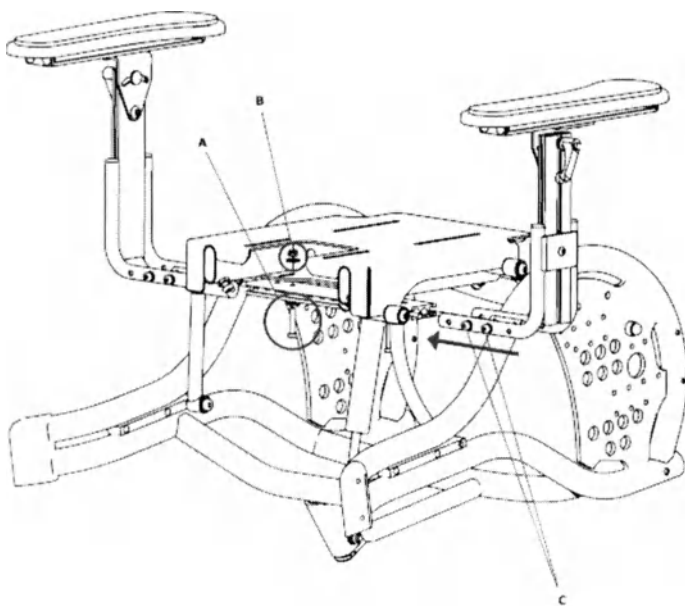

Подножка

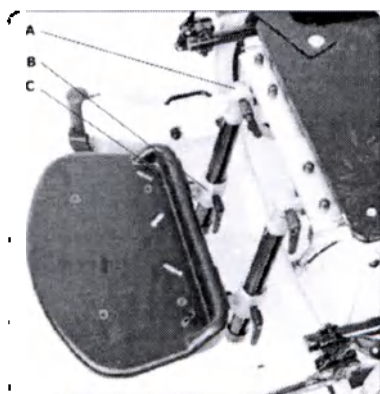

Подножка устанавливается в профиль, помещённый спереди под сиденье.


А - Регулировка угла подножки в колене

В - Регулировка высоты пластины подножки


С - Регулировка угла наклона пластины подножки

Регулируется глубина подножки


Для правильной установки угла изгиба подножки в колене вам необходимо отрегулировать её глубину, в зависимости от того, где кресло располагается на раме. Ослабьте болт (Е) и толкните держатель в правильное положение. Затяните болт (Е).
Примечание! Убедитесь, что настройки произведены верно.

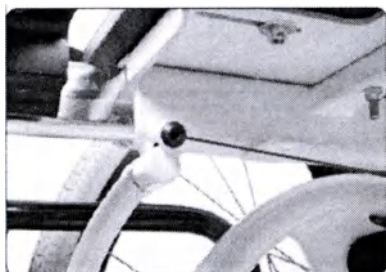

E

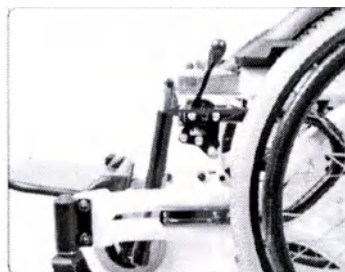

Стандартная подножка

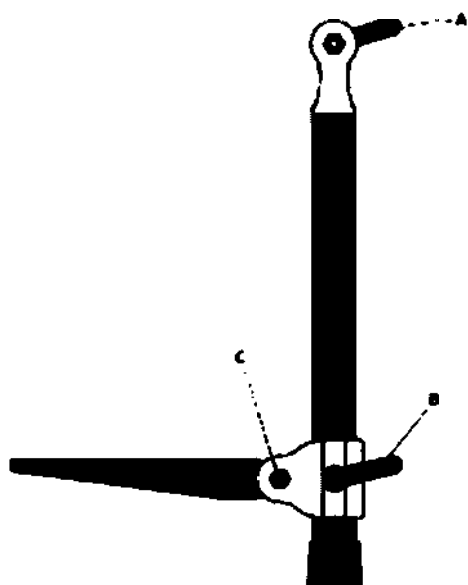

- Снимите пластиковую часть профиля.
- Установите опору подножки в держатель.
- Затяните болты.
- Поместите пластиковую часть обратно.

Регулировка угла изгиба в колене (А):

- 1) Ослабьте ручку.
- 2) Установите угол изгиба.
- 3) Затяните.


Регулировка высоты пластины подножки (В):

- 1) Ослабьте ручку.
- 2) Установите высоту пластины.
- 3) Затяните.

Регулировка угла наклона пластины подножки (С):

- 1) Ослабьте винты.
- 2) Установите угол наклона.
- 3) Затяните.

Адаптер для подножки на шарнирах

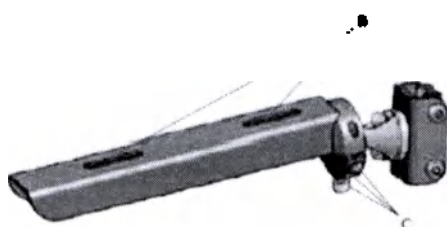

Регулировка высоты пластины подножки (А)

- 1) Ослабьте болт крепления (А).
- 2) Установите нужную высоту пластины подножки.
- 3) Затяните болт (А).


Регулировка глубины пластины подножки (В)

- 1) Ослабьте болт (В).
- 2) Установите глубину пластины подножки.
- 3) Затяните болт (В).

Регулировка угла наклона (С)

- 1) Ослабьте болт (С) для регулировки угла.
- 2) Установите желаемый угол.
- 3) Затяните болт (С).

Откидная подножка

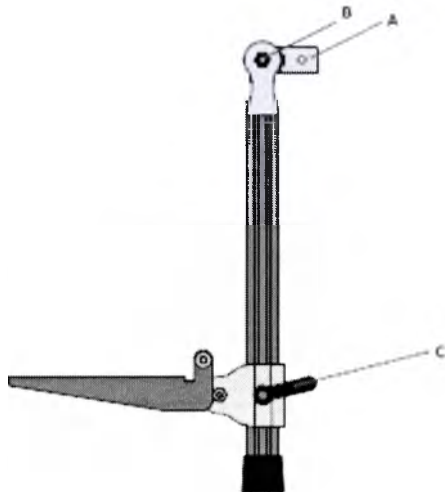

Установка подножки - А

Установите подножку. Закрутите надежно болты после установки.


Регулировка угла подножки в колене - В

- 1) Ослабьте ручку (В).
- 2) Установите нужный угол наклона.
- 3) Затяните ручку (В).

Регулировка пластины подножки по высоте - С

- 1) Ослабьте ручку (С).
- 2) Установите нужную высоту.
- 3) Затяните ручку (С)

Адаптер для подвижной подножки

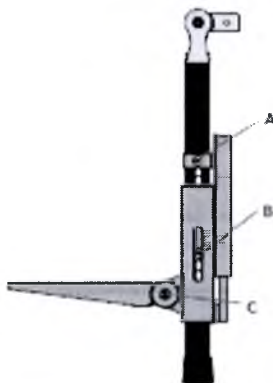

Zitzi Seabass может быть оснащено подвижной упругой подножкой, которая предотвращает сильную спастическую реакцию и служит продолжением динамического сиденья.

Установка подвижной подножки

Выньте профиль подножки и установите данную опцию.

Подвижность (С)

Для полного диапазона гибкости и подвижности, болт (В) должен быть помещён вниз.

Регулировка высоты


Ослабьте болты (В). Установите необходимую высоту.

Регулировка угла наклона подножки

Ослабьте болт (С) и установите необходимый угол наклона. Затем затяните болт.


Для достижения оптимальной гибкости подножка должна быть направлена вниз!

Опора для икр

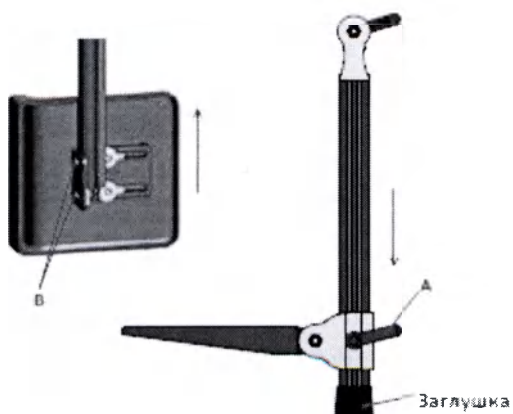

- Снимите пластину подножки, ослабив болт (А).
- Потяните ее вниз.
- Прикрепите опору для икр к опоре подножек.
- Установите необходимую высоту.
- Затяните болт (В).
- Установите пластину подножки обратно.

Фиксация передних колес

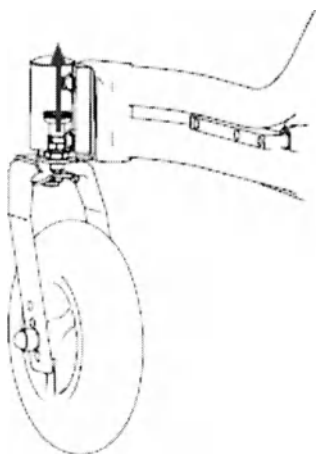


Для снятия фиксации, вытяните ручку вверх.

Чтобы оставить колёса поворотными, прокрутите ручку на 450 и аккуратно отпустите её.

Чтобы вновь зафиксировать направление движения передних колёс, вытяните ручку вверх, прокрутите ручку на 450 и отпустите её так, чтобы фиксирующая ось проходила через отверстие в вилке переднего колеса. Убедитесь, что колёса зафиксировались!

Брызговики

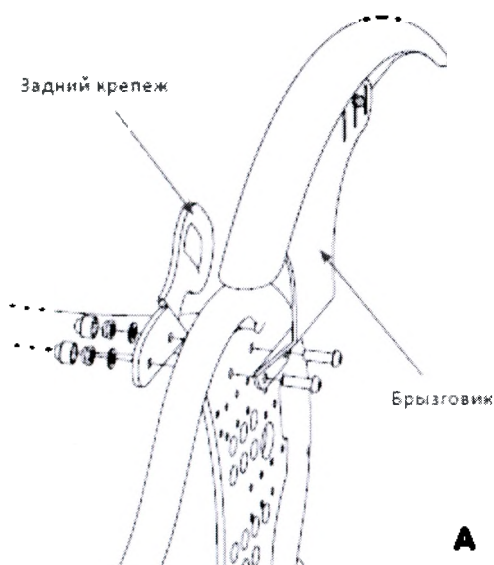


Снимите колесо при помощи кнопки быстрого снятия. Брызговик закрепляется на внешней стороне пластины рамы колеса при помощи двух болтов (А).

Отрегулируйте положение брызговиков так, чтобы колёса могли беспрепятственно вращаться.

Вы можете отрегулировать высоту и глубину брызговиков.

Ручка для сопровождающего лица всегда должна опираться на спинку кресла-коляски при транспортировке в автомобиле.

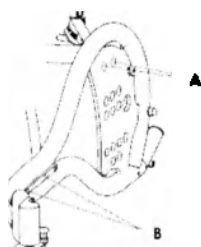

Инструменты для транспортировки



Установите набор инструментов для транспортировки, как показано на рисунках.

Задний крепёжный кронштейн


Каждый кронштейн должен быть закреплён при помощи двух болтов на внутренней стороне рамы.

Передний крепёжный кронштейн

Каждый кронштейн должен быть установлен при помощи 2 гаек в существующую резьбу скобы для транспортировки.

Кронштейн должен быть закреплён на внешней стороне рамы, со скобой - наружу и гайками - вовнутрь (B)

Стояночный тормоз

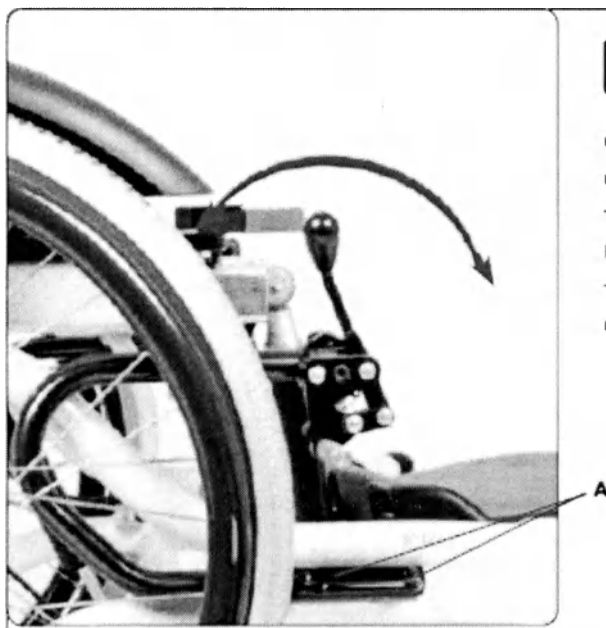


Стояночный тормоз должен быть установлен в то же

крепление, что и задний кронштейн для транспортировки (A).

Если вы не используете инструменты для транспортировки, устанавливайте стояночный тормоз при помощи прилагаемых болтов.


Антипрокидыватели

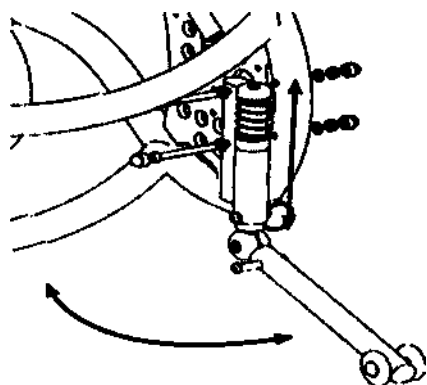

Если вы не используете антипрокидыватели, можете отвести их в сторону. Нажмите на антипрокидыватель и поверните его. Если вы услышали щелчок, это значит, что антипрокидыватель занял свое положение.

Рама Zitzl Seabass всегда должна быть укомплектована антипрокидывателями!

Упор для сопровождающего лица

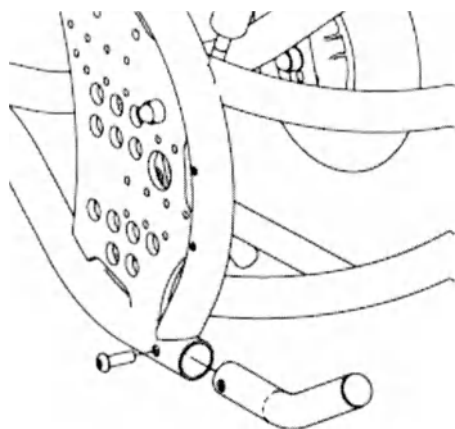

Снимите заглушку и вставьте упор для сопровождающего лица в трубку рамы. Когда отверстия на упоре и отверстия на раме совпадут, вставьте болт и закрутите его, зафиксировав упор для сопровождающего лица.

Порядок подготовки и работы для серии Zitzi Pengy

Напоминаем, что все кресла-коляски данной серии сконструированы на основе сиденья Zitzi Pengy и представляют собой комбинацию сиденья Zitzi Pengy и различных видов рам.

Поэтому порядок использования эксплуатации сиденья Zitzi Pengy относится ко всем моделям данной серии.

Сиденье Zitzi Pengy

Подголовник


Установка подголовника

Установите главный опорный кронштейн подголовника, зафиксировав его болтом (А) и рычагом (В). Обратите внимание, что болт (А) не должен быть сильно затянут, тогда вы сможете менять положение подголовника в вертикальной плоскости, предварительно ослабив рычаг (В).

Регулировка подголовника

Для регулировки подголовника в 3 плоскостях, ослабьте болт (Е) в шарнире, положение которого необходимо настроить. После того, как вы совершите желаемые настройки, затяните болт (Е).

Для регулировки высоты подголовника, ослабьте рычаг рукоятки (В) и переместите подголовник в нужное положение. Затем затяните рычаг рукоятки (В).

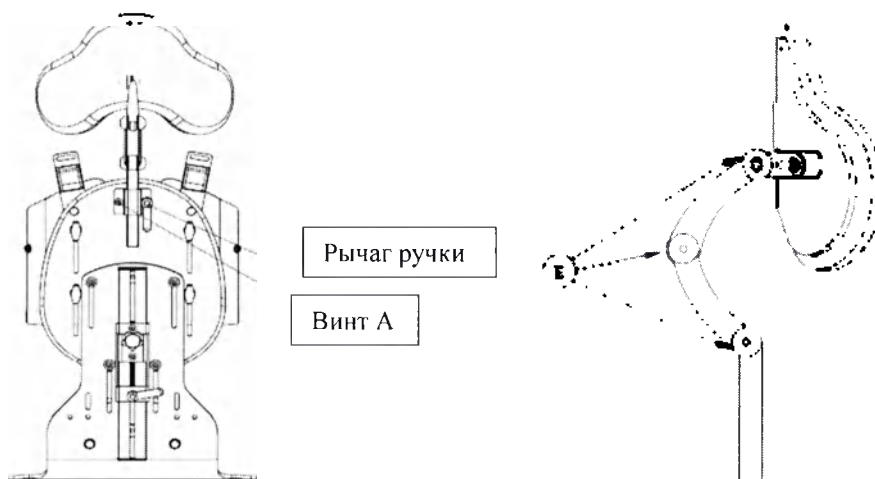

Спинка

Фиксация динамической спинки

Чтобы зафиксировать динамическую спинку, закрутите винт-барашек (С) по часовой стрелке. Если вы хотите восстановить функцию, поверните винт против часовой стрелки.

Регулировка высоты спинки

Для регулировки высоты спинки, ослабьте болты (В), используя шестигранный ключ, а затем настройте спинку по высоте. Установив желаемые настройки, снова затяните болты (В).

Регулировка угла наклона спинки


Чтобы настроить угол наклона спинки, сначала ослабьте винт-барашек (С), затем регулирующую ручку (Е), и установите спинку в необходимое положение.

Регулирующая ручка угла наклона спинки (E) всегда должна быть затянута во время использования кресла.

Регулировка боковых поддержек

Снимите со спинки обшивку. Ослабив ручку (D), установите боковые поддержки в крепления спинки. Отрегулируйте глубину до необходимого положения.


Завершив все настройки, удерживая поддержки, затяните ручку (D).

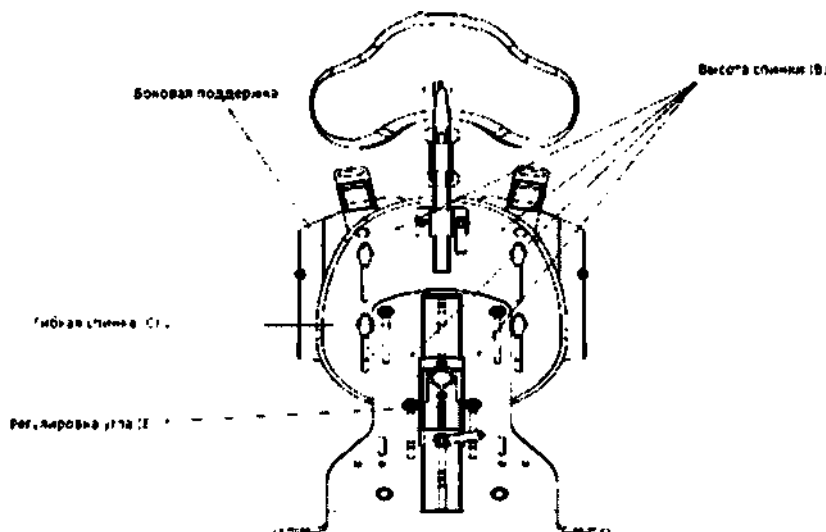

Опоры для бёдер

Регулировка глубины сиденья

Чтобы компенсировать разницу в длине ног, ослабьте болты (B) на опорах для бёдер при помощи шестигранного ключа, затем настройте необходимую длину опор. Затяните болты (B).

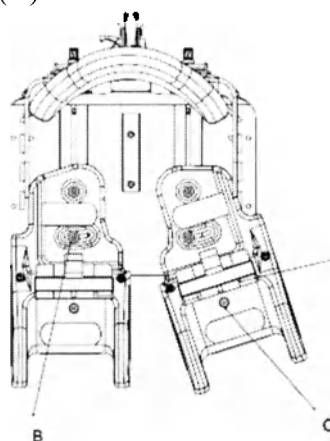

Пластина для регулирования
глубины сиденья

Регулировка сиденья анатомической формы

При регулировке глубины сиденья, необходимо скорректировать углубление анатомической формы. Открутите передние болты опоры для ног (C) с помощью шестигранного ключа и переместите пластину регулировки глубины сиденья в нужное положение. Затяните болты (C).

Абдукция/ Аддукция/ Свободное положение ног

Для установки опор для бёдер в любую из данных позиций, вам необходимо ослабить болт (B), используя шестигранный ключ, и переместить опоры в необходимое положение. Затем затянуть болт (B).

Рекомендации

Для удобства и точности в настройке глубины сиденья воспользуйтесь цветовой шкалой, нанесенной на основание сиденья, и на пластину регулировки опоры для бедер.


Например, если глубина сиденья регулируется до 43 см (серое поле), пластина регулировки должна быть тоже перемещена на серое поле. Это необходимо для того, чтобы обеспечить корректную посадку и правильное положение таза. Сиденья всегда точно настраиваются в соответствии с требованиями каждого клиента.

Примечание! Обратите внимание, что вам не следует полностью откручивать болты для настроек, их достаточно лишь слегка ослабить.

Бедренный ремень (фиксация тазобедренного сустава)

Установка бедренного ремня

При установке бедренного ремня в крепление используйте трехщелевую пряжку. Для правильной установки ремня в трехщелевую пряжку, см картинку ниже.

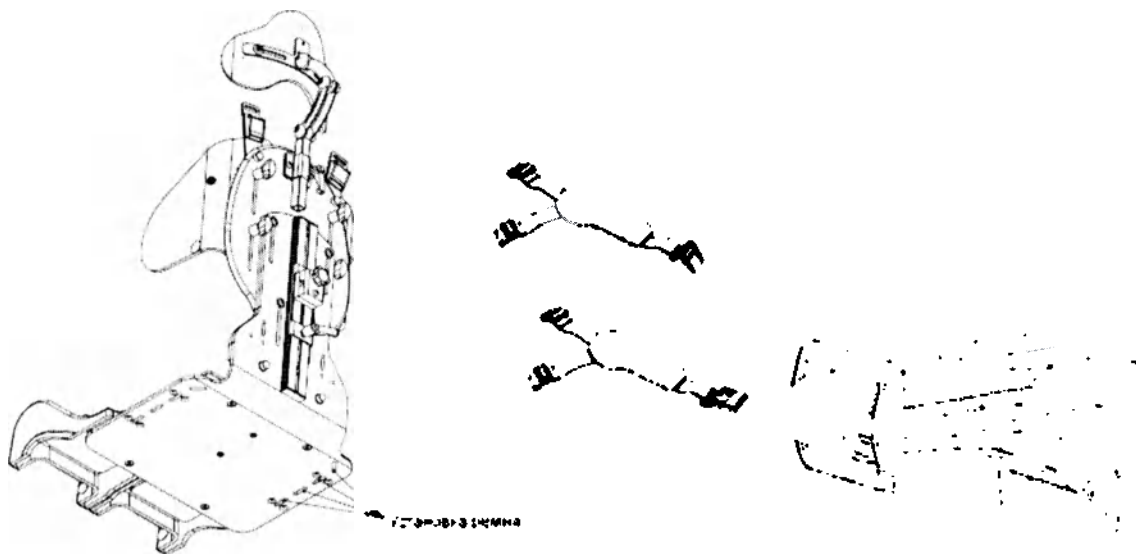

Подлокотники

Регулировка ширины подлокотников

Чтобы изменить расстояние между подлокотниками, ослабьте болт (B), затем поместите подлокотник в нужное положение и затяните болт (B). Для увеличения расстояния между подлокотниками открутите болты (A) и разверните подлокотники в стороны от сиденья на 180° с градусов. Затяните болты (B).


Регулировка высоты подлокотников

Ослабьте ручку (A) и переместите подлокотник на необходимую высоту, затем затяните ручку (A).

Регулировка угла наклона подлокотников

Ослабьте ручки (A), затем установите необходимый угол. Затяните рычаг рукоятки (A).

Регулировка положения подлокотников в горизонтальной плоскости Для регулировки бокового угла подлокотника ослабьте болт (В) и переместите подлокотник в нужное положение. Затяните болт (А).

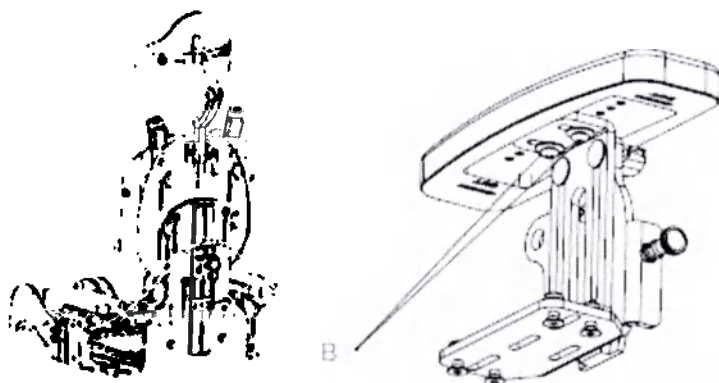


Столик цельный

Установка столика

Установите столик на подлокотники. Поверните фиксирующий рычаг столика в сторону спинки, направляя его под пластину подлокотника.

Поворачивайте фиксирующий рычаг до тех пор, пока он не окажется под пластиной подлокотника.

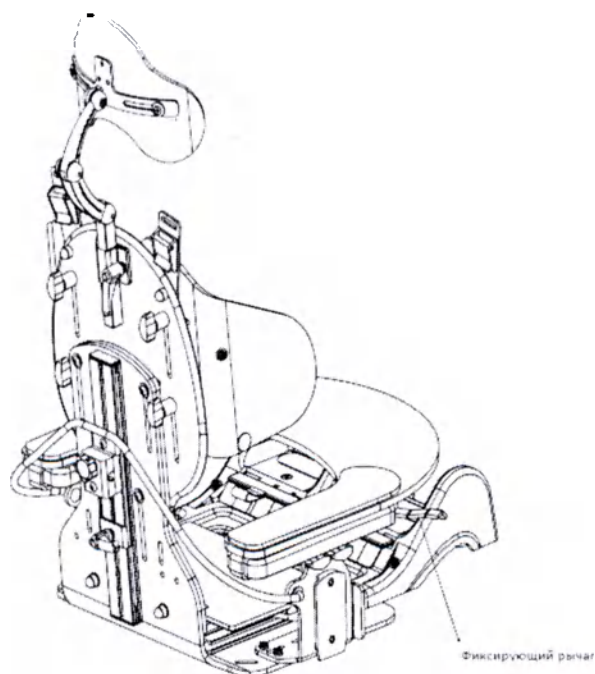

Порядок подготовки и эксплуатации для моделей Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex

Особенности эксплуатации кресла Zitzi Pengy описаны выше.

Особенности эксплуатации рам Flipper Pro, Flipper Pro Flex описаны выше, в разделе, посвященном эксплуатации модели Zitzi Delfi Pro Flipper Pro.

Порядок подготовки и эксплуатации для модели Zitzi Pengy Snapper

Особенности эксплуатации кресла Zitzi Pengy описаны выше.

Особенности эксплуатации рамы Snapper описаны выше, в разделе, посвященном эксплуатации модели Zitzi Delfi Pro Snapper.

Порядок подготовки и эксплуатации для модели Zitzi Pengy Pengy

Особенности эксплуатации кресла Zitzi Pengy описаны выше, в данном разделе.

Особенности эксплуатации рамы Pengy описаны выше, в разделе, посвященном эксплуатации модели Zitzi Delfi Pro Pengy.

Ниже приводятся рекомендации по установке кресла Zitzi Pengy на раму Pengy.

Установка кресла Pengy на раму Pengy

Установка кресла

Придерживая кресло Pengy за подлокотники, поместите направляющие в пазы, как изображено на картинке. Убедитесь, что штифт заблокирован, когда кресло Pengy находится в нижнем положении кронштейна.

Снятие кресла


Ослабьте штифт (А), вытянув его и повернув на четверть оборота. Затем поднимите кресло за подлокотники вверх.

Примечание!

Штифты всегда должны быть заблокированы, когда кресло используется.

Совет!

Кресло Zitzi Pengy может быть установлено как по ходу движения, так и против него.

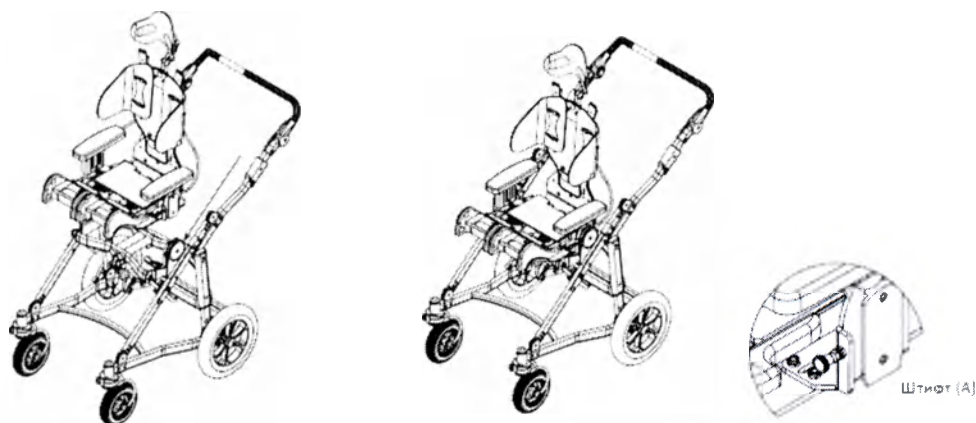


Порядок подготовки и работы для серии Anatomic Sits

Ниже приводятся особенности эксплуатации кресла Anatomic Sits.

Особенности эксплуатации рам Flipper Pro, Flipper Pro Flex, Snapper, Pengy, Guppy, Seabass Pro, на которые может быть установлено данное сиденье, приведены ранее, в соответствующих разделах.

- 1) Убедитесь, что кресло сбалансировано, зафиксировано и установлено на раму в правильном положении, т.е. угол наклона кресла верно отрегулирован.
- 2) Убедитесь, что стояночный тормоз заблокирован и коляска прочно стоит на поверхности.
- 3) Перед тем, как посадить ребёнка в кресло, наклоните спинку до предела.
- 4) Убедитесь, что пользователь комфортно расположился в кресле, таз имеет правильное – прямое положение.
- 5) Зафиксируйте таз бедренным ремнём:
 - Расположите ремень на бёдрах и зафиксируйте его с обеих сторон. (см. рисунок 1).
 - Отрегулируйте положение ремня задними ремешками. Пряжка должна находиться ровно посередине, в противном случае она может не заблокироваться. Затяните ремень. Для стабилизации положения таза, бедренный ремень должен быть отрегулирован под конкретного пользователя. Убедитесь, что пряжка правильно застёгнута и ремень хорошо затянут.
- 6) Закрепите ремни поддержки и другие ремни, если собираетесь их использовать.
- 7) Верните спинку кресла в исходное положение. Используйте функцию наклона кресла в течение дня, чтобы создавать изменения и распределять давление.
- 8) Убедитесь, что все поддержки правильно установлены и закреплены.

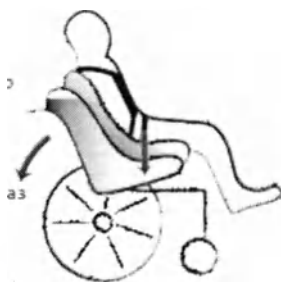


Порядок подготовки и работы для серии Anatomic Soft Sits

Эксплуатация кресел-колясок Anatomic Soft Sits является аналогичной модельному ряду Anatomic Sits, описывается выше, в разделе «Порядок подготовки и работы для серии Anatomic Sits».

Порядок подготовки и работы для модели Carseat Pro

Сиденье Carseat Pro

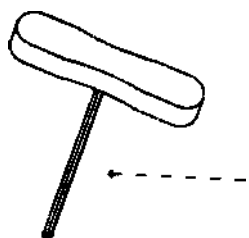


Настройка и регулировка необходимых параметров сиденья происходит с помощью специальных инструментов. В большинстве случаев подходит 4 мм шестигранный ключ.

Данный символ означает, что регулировка осуществляется с помощью шестигранного ключа.


Регулировка сиденья

Вы можете легко отрегулировать глубину сиденья, абдукцию/аддукцию (разведение/сведение) ног, компенсировать разницу в длине ног. Снимите обшивку кресла. Слегка ослабьте болты регулировки.

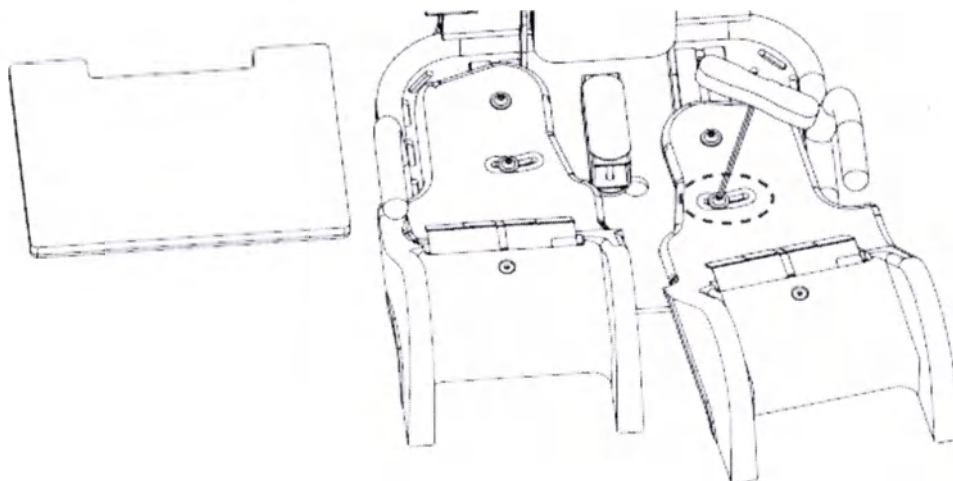


Регулировка длины опор для ног

Шестигранным ключом ослабьте два болта и установите опору бедра в желаемое положение. Закрутите болты.

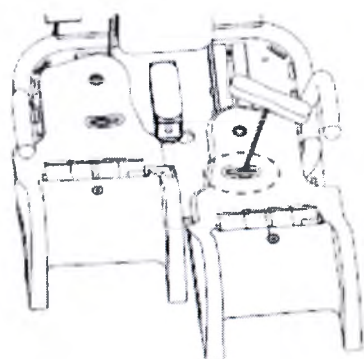

Обшивка опор для ног

Приподнимите обшивку, чтобы получить доступ к кнопкам, которые держат обшивку в местах опор для ног. Отстегните обшивку от кнопок. Каждая опора для ног состоит из двух частей обшивки. Правая опора для ноги имеет две части обшивки, маркированные "Right", а левая опора для ноги имеет две части обшивки, маркированные «Left» (на рисунке представлен вид сзади на опоры для ног кресла CarseatPro). Изогнутая часть обшивки опоры для ног должна всегда быть на наружной стороне опоры и прямая часть обшивки опоры для ног всегда должна быть на внутренней стороне.

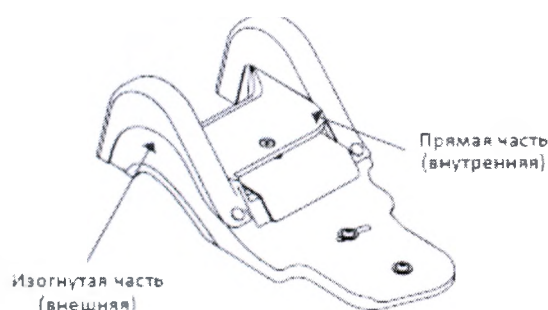



Регулировка углубления сиденья

При регулировке глубины сиденья следует также отрегулировать скат сиденья индивидуально под пользователя.


Абдукция/аддукция (разведение/сведение) ног

Шестигранным ключом ослабьте передние болты на опорах для ног. Установите опоры в нужное положение. Затяните болты.

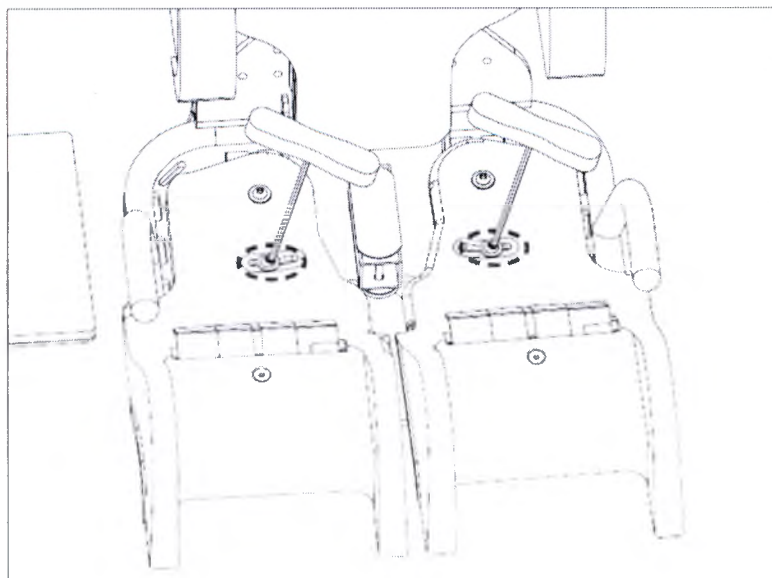


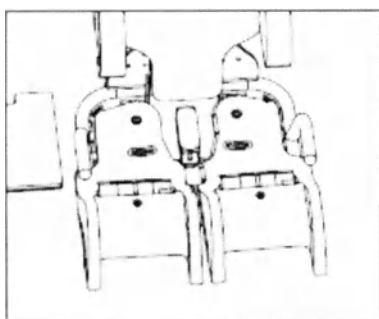


Нейтральное положение

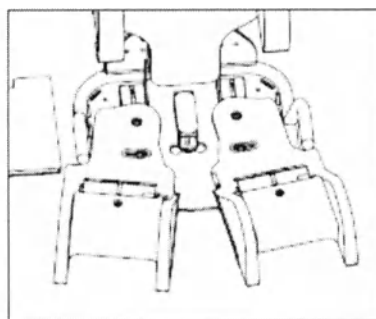

Аддукция

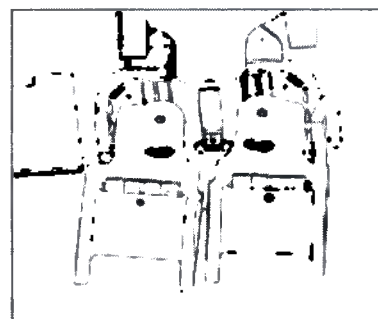


Абдукция

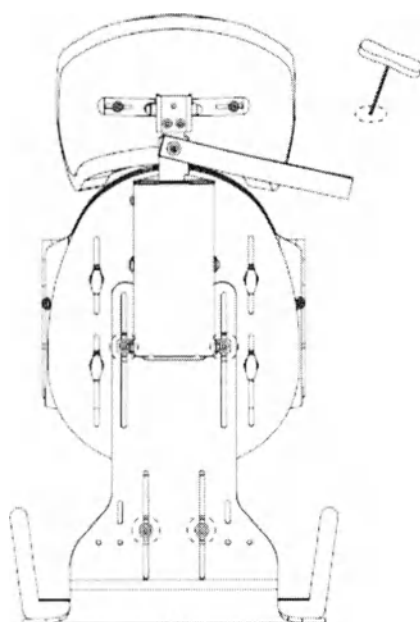

Регулировка спинки кресла

Шестигранным ключом ослабьте болты, помеченные красным цветом на рисунке, и установите желаемую высоту. Затяните болты.

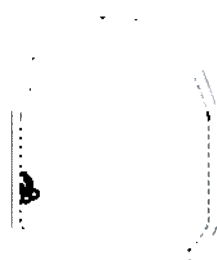

Уменьшение поперечной ширины спинки

Для того чтобы уменьшить поперечную ширину спинки, необходимо снять пластину спинки и ее обшивку. Затем отрезать не более 2-х см от пластины спинки. Рекомендуется резать по пунктирным линиям.

Регулировка боковой поддержки

Ослабьте ручки, помеченные красным цветом на рисунке, и установите желаемую ширину, угол наклона и высоту боковой поддержки. Закрутите ручки.



Подголовник

Регулировка высоты подголовника


- Ослабьте болты регулировки.
- Установите желаемую высоту.
- В целях безопасности подголовник кресла является несъемным.
- Затяните болты.

Регулировка подголовника в трех плоскостях

- Ослабьте болты регулировки (B).
- Установите желаемое положение.
- Затяните болты.

Регулировка


- Снимите заглушки с болтов М6 (D)
- Ослабьте регулировочные болты (C).
- Установите необходимые высоту и угол наклона.
- Затяните болты (C).
- Поставьте обратно заглушки (D).

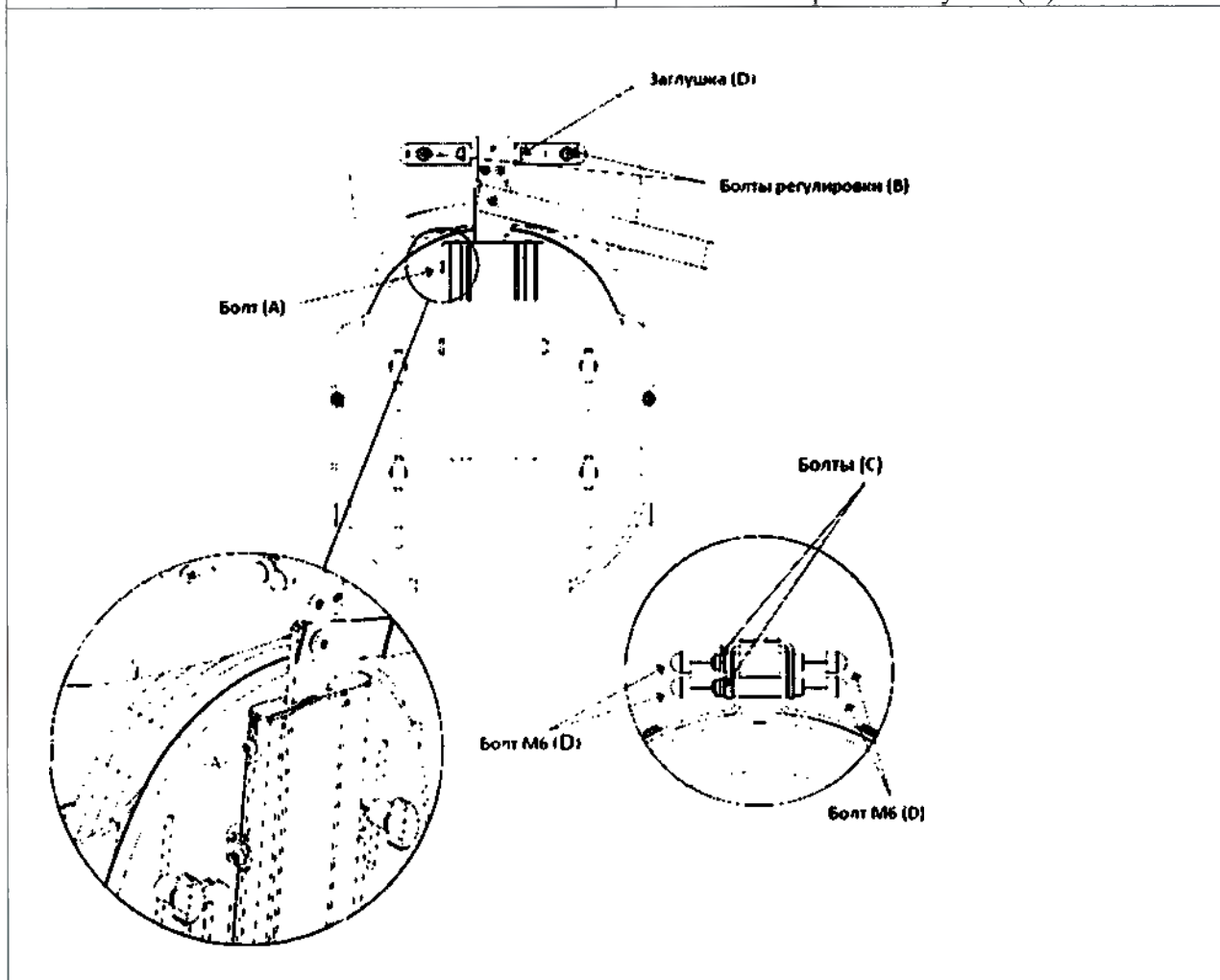

Поддержка таза


Поддержка таза устанавливается на кресло в специальные крепления при помощи болтов, гаек и шайб, как показано на рисунке. Закрутите болты после того, как установите поддержку.

Поддержка таза устанавливается за ручками безопасности.

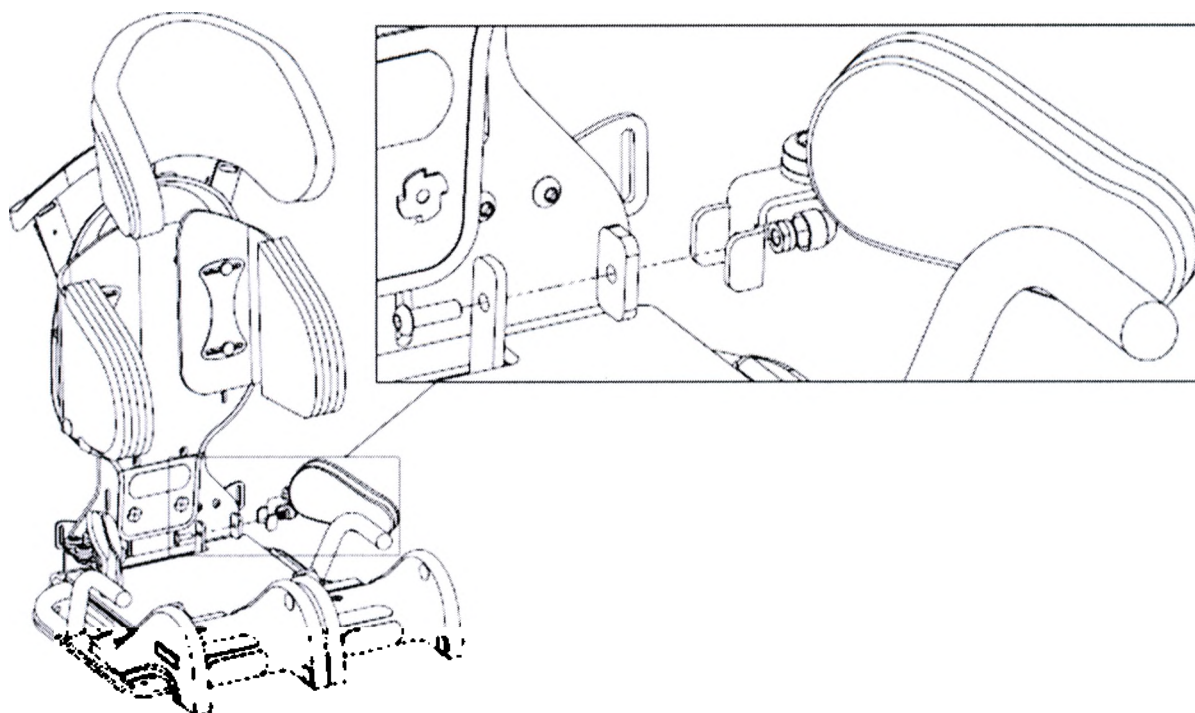


Поддержка поясницы

- Прежде чем установить поддержку поясницы, отрегулируйте спинку сиденья.
- Снимите обшивку спинки.
- Поместите поддержку поясницы под обшивку (примерное расположение указано маркировкой красного цвета на рисунке ниже) и закрепите ее при помощи липучек.
- Установите обшивку спинки в исходное положение.

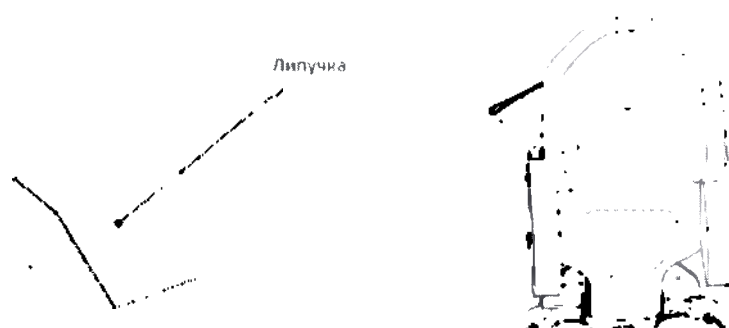


Подножка

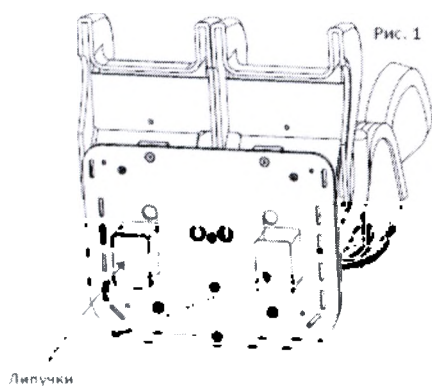


Липучки, входящие в комплект, должны крепиться к нижней части сиденья Carseat Pro. Внутренний край липучки должен быть расположен в соответствии с линией отверстий и быть за ними, как показано на рисунке. Сначала поместите подножку на раму. Затем установите сиденье Carseat Pro на поверхность подножки. Убедитесь, что обе стороны липучки соединились.


Бедренный ремень

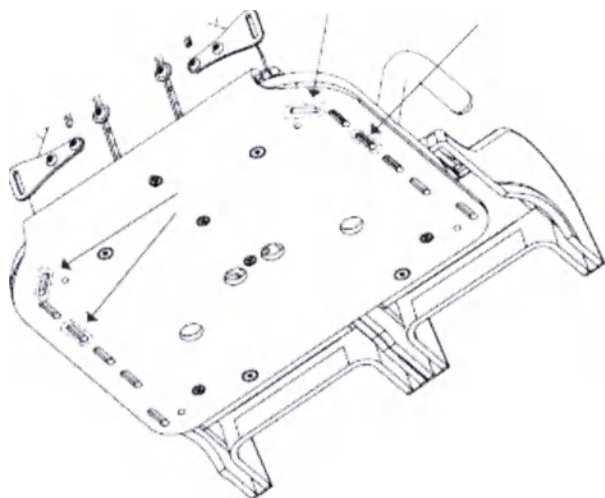

При установке бедренного ремня протяните ремни в пазы, помеченные красным цветом, на пластине сиденья как показано на рисунке (Е).

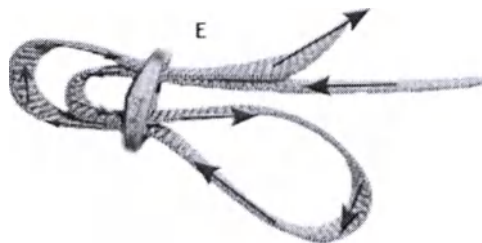

Установка серий поддержек

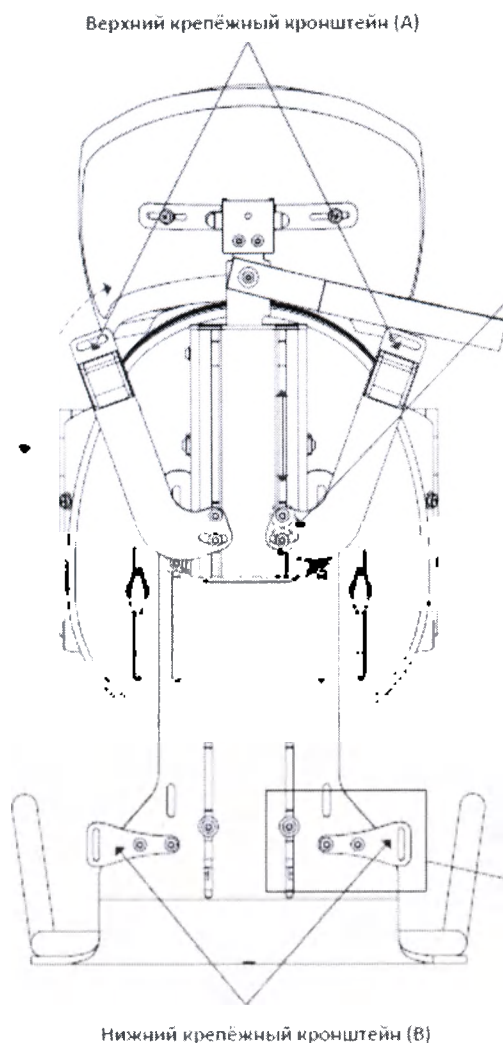

Установка верхнего крепёжного кронштейна (А)

Поместите направляющие (А) верхнего крепёжного кронштейна в пазы профиля спинки. Затяните болты.

Регулировка верхнего крепёжного кронштейна (А)


Ослабьте болты и установите желаемые высоту и угол наклона. Установите высоту верхнего крепёжного кронштейна так, чтобы направление вытягивания ремней из верхних точек крепления было немного выше плечевой зоны. Затяните болты.

Установка ремней поддержки

Проденьте ремни через верхние точки крепления и пряжку. Зафиксируйте нижние ремешки ремней поддержки в нижнем крепёжном кронштейне. Используйте прилагаемые трёхщелевые пряжки (Е).


Нижний крепёжный кронштейн (В)

Установите нижний крепёжный кронштейн при помощи прилагаемых болтов, гаек и шайб, как показано на рисунке внизу. Затяните болты.

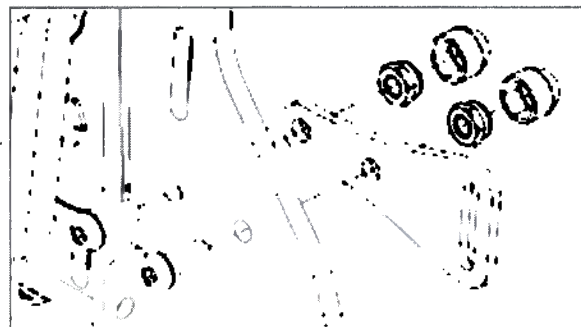

Столик

Столик устанавливается на колени пользователя и закрепляется при помощи липучек (1 и 2), идущих в комплекте с креслом CarSeat Pro, как показано на рисунке ниже. При желании можно использовать столик в качестве подлокотников.

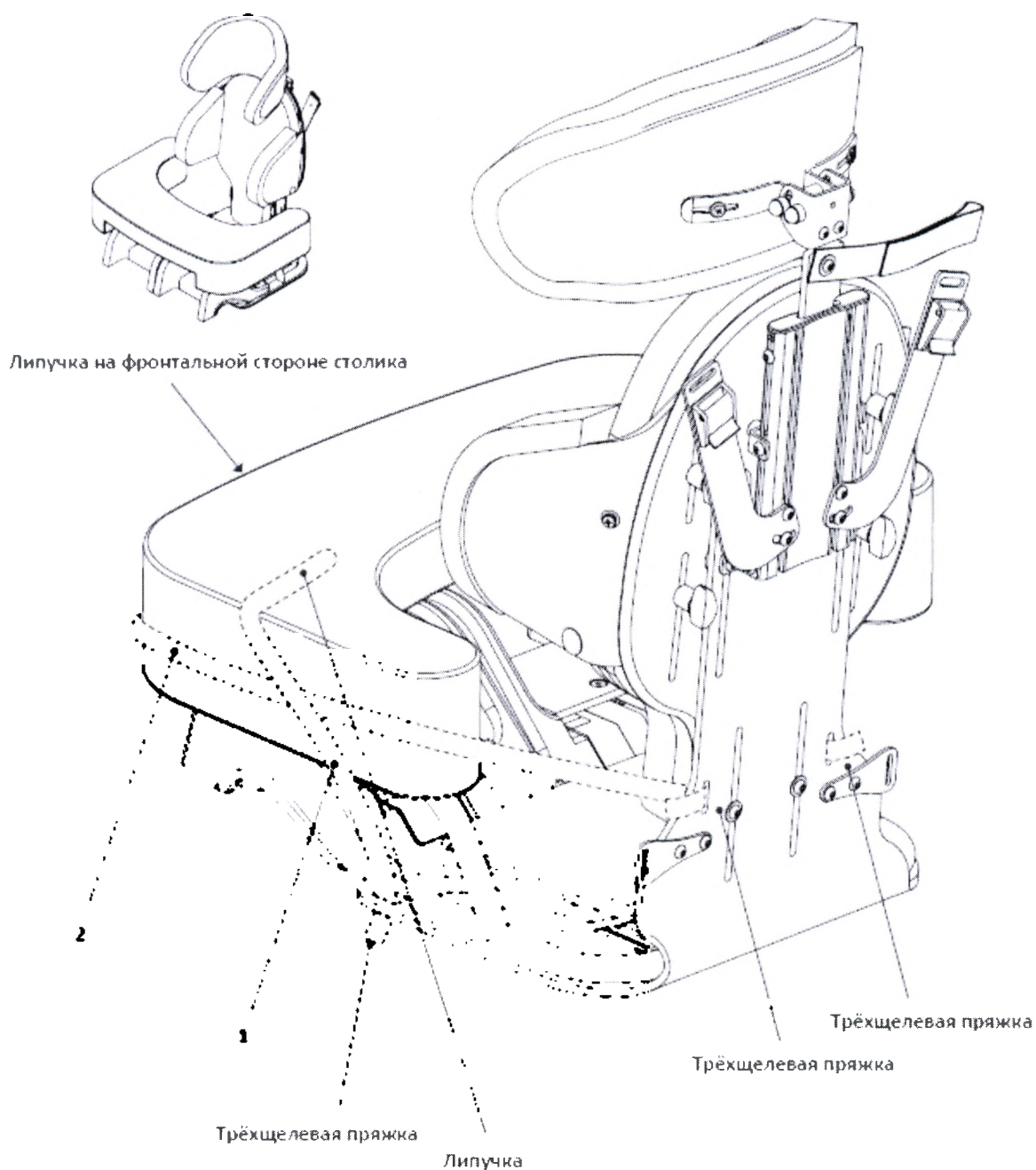

Установка сиденья Carseat Pro на раму Pengy

Особенности эксплуатации рамы Pengy описаны выше, в разделе, посвященном эксплуатации модели Zitzi Delfi Pro Pengy.

Ниже приводятся рекомендации по установке кресла Carseat Pro на раму Pengy.


Установка кресла Carseat Pro

Установите пластину адаптера на раму. Закрепите её штифтом (А). Затем поместите Carseat Pro на адаптер сиденья. Нажмите на переднюю часть Carseat Pro, пока не сработают фиксаторы (В). Зафиксируйте спинку на заднем кронштейне при помощи комплектующего ремня.

Снятие кресла Carseat Pro

Ослабьте фиксатор (В). Теперь кресло Carseat Pro не закреплено и его можно легко снять. Чтобы снять Carseat Pro вместе с пластиной адаптера, ослабьте штифт (А). Теперь кресло и пластина адаптера не закреплены и их можно снять прямо с .

Примечание! Штифты всегда должны быть заблокированы, когда кресло используется.

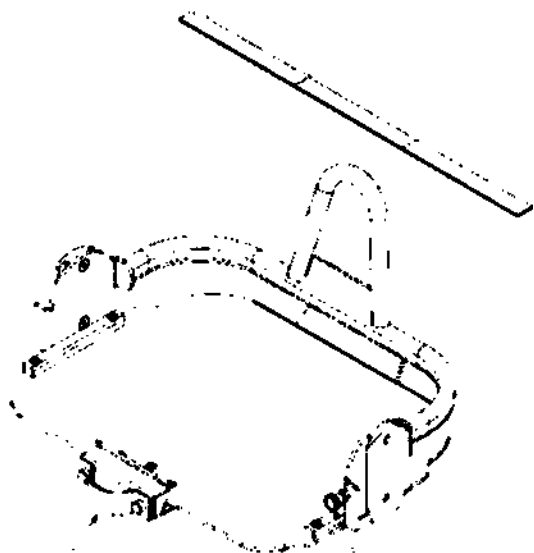

6.Способы очистки дезинфекции медицинских изделий.

Изделие поставляется нестерильным.

Подушки и накладки ремней можно стирать при температуре 60°, в режиме деликатной стирки. Машинная сушка запрещена. Необходимо следовать указаниям на этикетке изделия с инструкцией по уходу. Те же правила ухода относятся к ремням поддержки и бедренным ремням производства Anatomic SITТ.

Пластиковые и металлические части: можно производить влажную очистку от пыли и грязи. Рекомендуется использовать биоразлагаемые моющие средства, в целях заботы об окружающей среде.

7. Упаковка и маркировка

Кресла – коляски Anatomic SITT для транспортировки упаковываются в пузырчатый полиэтилен и / или полиэтиленовую пленку, далее укладываются в коробку из картона. Некоторые составные части и принадлежности отдельно упаковываются в полиэтиленовую пленку и укладываются в коробку меньшего размера.

На каждой упаковке имеется четкая маркировка, содержащая:


- наименование изделия;
- размер изделия;
- дата изготовления (год и месяц);
- грузоподъемность;
- рекомендуемая максимальная масса пользователя;
- серийный номер;
- адрес и наименование предприятия-изготовителя или поставщика;
- символ, обозначающий соответствие требованиям Директивы ЕС 93/42/ЕЕС

Маркировка выполнена способом, обеспечивающим устойчивость надписей к воздействию факторам внешней среды в процессе эксплуатации.


На коробку для транспортировки нанесены основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки.

Маркировка изделий соответствует ISO 15223-1:2012 (Медицинские изделия – Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации)

Пример маркировки:

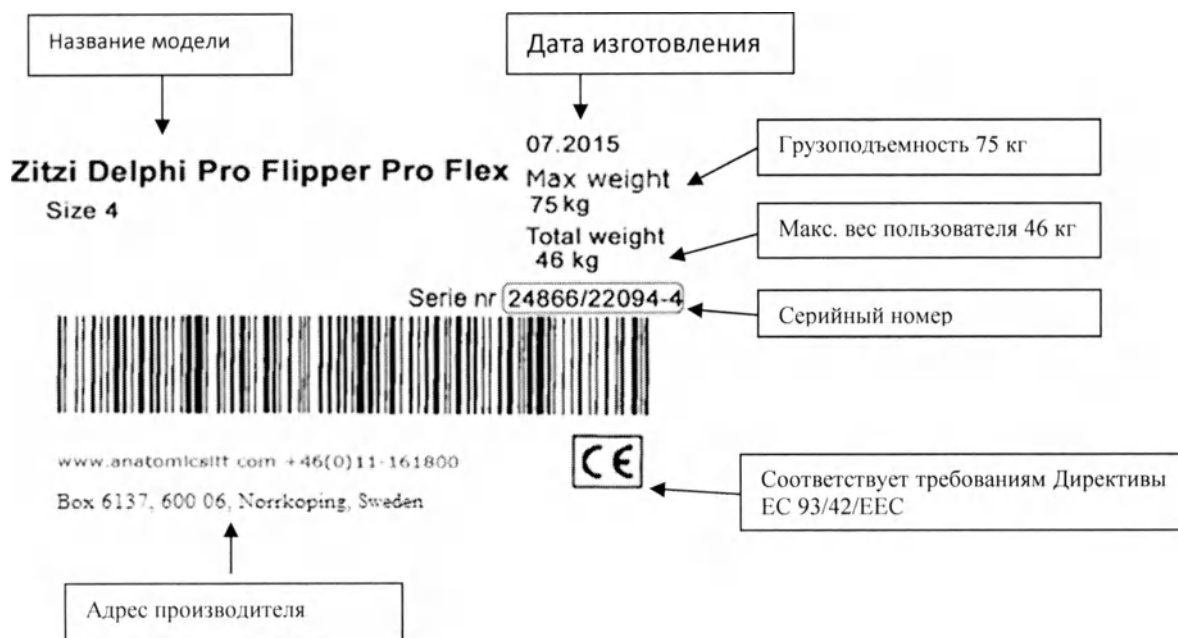

Пример маркировки на русском языке:

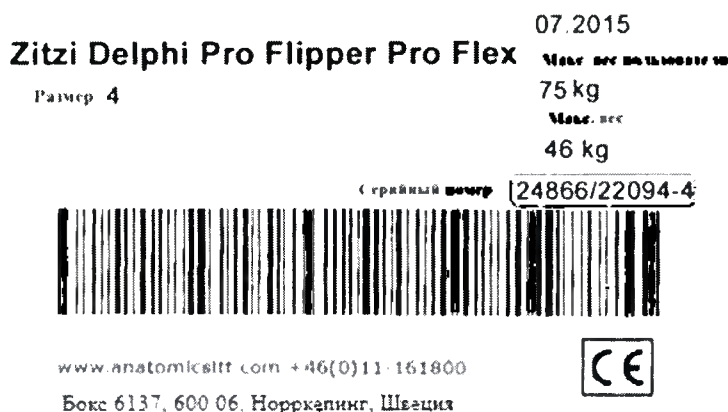

8. Условия хранения и транспортировки

- Температура хранения изделия составляет: -40°C..+65°C, влажность воздуха от 35% до 85%.

Температура эксплуатации изделия составляет -25°C..+50°C, влажность воздуха от 45% до 85%.

Для моделей, оснащенных газовой пружиной, температура хранения составляет: -25°C..+65°C, влажность воздуха от 35% до 85%, температура эксплуатации составляет -25°C..+50°C.

Продукт следует хранить в закрытых сухих помещениях с достаточной циркуляцией воздуха и защищать его от внешних воздействий.

Условия транспортировки являются аналогичными.

Срок годности – 6 лет.

9. Утилизация медицинского изделия.

Части использованного изделия должны быть сгруппированы по типу материала: металл, пластик и ткань. Утилизация материалов каждого вида проводится в соответствии с нормативными документами и требованиями для утилизации данного вида изделий, принятыми в стране распространения.

Газовая пружина относится к опасным материалам. Газовые пружины состоят главным образом из металла, который может быть переработан, но сначала необходимо стравить газовое давление. Для того чтобы стравить давление газовой пружины и сделать ее безопасной для переработки необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр.

10. Техническое обслуживание

Для всех вариантов исполнения кресел-колясок Anatomic SITT

Для безопасного и правильного функционирования всех моделей, рекомендуется регулярно проходить техническое обслуживание.

Необходимость обслуживания зависит от частоты использования и износа шасси, а также других составляющих. Следует контролировать все подвижные части рамы и крепежи, проверять их целостность. При повреждении какой-либо части кресла-коляски, ее можно поменять.

При ремонте следует использовать только оригинальные запасные части Anatomic SITT.

Сервисное обслуживание всегда должно выполняться квалифицированным специалистом. По вопросам, связанным с техническим обслуживанием изделия, следует обращаться к официальному дилеру Anatomic Sitt в России.

Газовая пружина.

Газовая пружина должна использоваться регулярно, чтобы поддержать её функционирование. Когда кресло не используется, газовая пружина должна быть активирована, по крайней мере один раз в 6 месяцев. Кроме того, при хранении кресла необходимо убедиться, что стержень пружины расположен внизу, иначе она может перестать выполнять свою функцию.

Необходимо регулярно проверять функциональность газовой пружины.

Очистка

Окрашенные поверхности, передние и задние колеса, ручки очищаются чистящими растворами. Никогда не используйте растворители, бензин и подобные вещества.

Финальная обработка

После влажной очистки все провода, закрытые места и отверстия, должны быть вытерты насухо и обработаны маслом.

Маркировка

Убедитесь, что СЕ-маркировка не повреждена. Маркировка находится на задней части рамы.

Колёса

Убедитесь, что передние и задние колёса не изношены, вращаются свободно и бесшумно.

Окраска

Для предотвращения появления коррозии и царапин, проверьте целостность покраски. При необходимости Anatomic SITT AB может устранить повреждения окрашенных поверхностей рамы.

Баланс и симметрия

Убедитесь, что симметрия и баланс колёс не нарушены. Для получения подробной информации о регулировках передних и задних колёс смотрите страницы 14-21 данного руководства.

Цилиндрическая рама и детали

Сварные и болтовые соединения, втулки и петли работают бесшумно. Смазывайте их при необходимости. Проверяйте ручки, винты и другие крепёжные детали. При необходимости заменяйте изношенные части.

Вилки

Убедитесь, что крепления и подшипники легко вращаются. При необходимости смазывайте передние вилки.

Ручка для сопровождающего лица

Убедитесь, что мягкое покрытие и ручки находятся в рабочем состоянии. Ручка для сопровождающего регулируется по высоте. Регулярно проверяйте состояние ручек и болтов.

Тормоза

Убедитесь, что стояночный тормоз и барабанный тормоз надёжно фиксируют коляску.

Регулировка складывания (для моделей оснащенных рамой Pengy)

Убедитесь, что рама складывается без затруднений.

Регулировка угла наклона

Убедитесь, что регулирование угла наклона кресла не затруднено.

Убедитесь, что угол наклона зафиксирован в верхнем и нижнем положениях.

Контроль функционирования

Контроль функционирования предполагает осмотр и проверку колёс, симметрии, тормозов.

11. Гарантийные обязательства

Гарантия на производственные дефекты действует в течение 1 (одного) года с момента даты поставки. Гарантия недействительна, если продукт был подвергнут воздействию внешних факторов или грубому обращению. Это необходимое условие, для выполнения гарантийных обязательств. Всегда прикладывайте упаковочный лист предыдущей поставки.

Необходимо как можно подробнее описать ошибку и возможную причину для гарантийной претензии. Гарантия предполагает ремонт или обмен изделия. Требуется приложить копию счета-фактуры и сообщить, если продукт должен вернуться назад после ремонта. Указывается адрес доставки, контактное лицо и номер телефона.

Необходимо хорошо упаковать продукт, чтобы защитить его от повреждений во время перевозки. Необходимо зафиксировать идентификационный номер отправки в документации, для того чтобы отслеживать пересылку

12. Рекламация

Организация, принимающая на территории Российской Федерации претензии от потребителя по качеству продукта:

Общество с ограниченной ответственностью «Ортоника»

ООО «Ортоника», юридический адрес: 105554, г. Москва, ул. Парковая 11-я, д. 9/35, кв. 94

Телефон: +7 (495) 641-71-77

Приложение

Кресла - коляски для инвалидов Anatomic SITT, в исполнениях, с принадлежностями:

1. Кресла-коляски Zitzi Delfi Pro: модели Zitzi Delfi Pro Flipper Pro, Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Delfi Pro Snapper, Zitzi Delfi Pro Pengy, Zitzi Delfi Pro Guppy, Zitzi Delfi Pro Seabass Pro.

Принадлежности:

1. К модели Zitzi Delfi Pro Flipper Pro:
 - 1.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
 - 1.2 Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
 - 1.3 Подголовник Pro Standard, размер 1, 2;
 - 1.4 Подголовник Pro Standard удлиненный, размер 1, 2;
 - 1.5 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
 - 1.6 Подголовник Pro Junior;
 - 1.7 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
 - 1.8 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
 - 1.9 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
 - 1.10 Регулируемое крепление подголовника;
 - 1.11 Активная повязка для лба Zitzi;
 - 1.12 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
 - 1.13 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
 - 1.14 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
 - 1.15 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
 - 1.16 Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro;
 - 1.17 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
 - 1.18 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
 - 1.19 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
 - 1.20 Грудной ремень Zitzi Delfi Pro;
 - 1.21 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
 - 1.22 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
 - 1.23 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
 - 1.24 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
 - 1.25 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
 - 1.26 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
 - 1.27 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
 - 1.28 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
 - 1.29 Поддержка таза, размер 1, 2;
 - 1.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L);

- 1.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.33 Опора для предплечья;
- 1.34 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 1.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.36 Столик откидной Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 1.37 Столик с усиленными крепежами Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 1.38 Защитное покрытие на столик, размер 1, 2;
- 1.39 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 1.40 Регулируемая единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 1.41 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 1.42 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.43 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.44 Откидные регулируемые подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.45 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.46 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 1.47 Адаптер для подвижной подножки;
- 1.48 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 1.49 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 1.50 Пластиковая часть опоры бедра, медиально / латерально, +4 см, размер 1, 2, 3;
- 1.51 Опора бедра, медиально / латерально, + 4 см, размеры 1, 2, 3;
- 1.52 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 1.53 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.54 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.55 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 1.56 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 1.57 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 1.58 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 1.59 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 1.60 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 1.61 Адаптер сиденья;
- 1.62 Адаптер сиденья 285175;
- 1.63 Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro;
- 1.64 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 1.65 Мобиль;
- 1.66 Капюшон;
- 1.67 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 1.68 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 1.69 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 1.70 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 1.71 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 1.72 Педаль (для регулировки высоты);
- 1.73 Подушка спинки Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.74 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Delfi Pro;

- 1.75 Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro
2. К модели Zitzi Delfi Pro Flipper Pro Flex:
- 2.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.2 Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.3 Подголовник Pro Standard, размер 1, 2;
- 2.4 Подголовник Pro Standard удлиненный, размер 1, 2;
- 2.5 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 2.6 Подголовник Pro Junior;
- 2.7 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 2.8 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.9 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 2.10 Регулируемое крепление подголовника;
- 2.11 Активная повязка для лба Zitzi;
- 2.12 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 2.13 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 2.14 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.15 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 2.16 Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro;
- 2.17 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.18 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.19 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.20 Грудной ремень Zitzi Delfi Pro;
- 2.21 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 2.22 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.23 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 2.24 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.25 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 2.26 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 2.27 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.28 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 2.29 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 2.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 2.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 2.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 2.33 Опора для предплечья;
- 2.34 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 2.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.36 Столик откидной Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 2.37 Столик с усиленными крепежами Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 2.38 Защитное покрытие на столик, размер 1, 2;
- 2.39 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;

- 2.40 Регулируемая единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 2.41 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 2.42 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.43 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.44 Откидные регулируемые подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.45 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.46 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 2.47 Адаптер для подвижной подножки;
- 2.48 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 2.49 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 2.50 Пластиковая часть опоры бедра, медиально / латерально, +4 см, размер 1, 2, 3;
- 2.51 Опора бедра, медиально / латерально, + 4 см, размеры 1, 2, 3;
- 2.52 Покрывтие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 2.53 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.54 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.55 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 2.56 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 2.57 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 2.58 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 2.59 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 2.60 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 2.61 Адаптер сиденья 285175;
- 2.62 Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro;
- 2.63 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 2.64 Мобиль;
- 2.65 Капюшон;
- 2.66 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 2.67 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 2.68 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 2.69 Ручка для сопровождающего лица 844230;
- 2.70 Ручка для сопровождающего лица 844012;
- 2.71 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 2.72 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 2.73 Педаль (для регулировки высоты);
- 2.74 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 2.75 Задние колеса цельнолитные Flipper Pro Flex, диаметр 30 см, 40 см;
- 2.76 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 2.77 Подушка спинки Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.78 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Delfi Pro;
- 2.79 Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro

3.К модели Zitzi Delfi Pro Snapper:

- 3.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;

- 3.2 Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.3 Подголовник Pro Standard, размер 1, 2;
- 3.4 Подголовник Pro Standard удлиненный, размер 1, 2;
- 3.5 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 3.6 Подголовник Pro Junior;
- 3.7 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 3.8 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.9 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 3.10 Регулируемое крепление подголовника;
- 3.11 Активная повязка для лба Zitzi;
- 3.12 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 3.13 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 3.14 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.15 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 3.16 Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro;
- 3.17 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.18 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.19 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.20 Грудной ремень Zitzi Delfi Pro;
- 3.21 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 3.22 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.23 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 3.24 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.25 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 3.26 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 3.27 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.28 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 3.29 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 3.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 3.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 3.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 3.33 Опора для предплечья;
- 3.34 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 3.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.36 Столик откидной Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 3.37 Столик с усиленными крепежами Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 3.38 Защитное покрытие на столик, размер 1, 2;
- 3.39 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 3.40 Регулируемая единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 3.41 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 3.42 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.43 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.44 Откидные регулируемые подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.45 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;

- 3.46 Подушка для отдельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 3.47 Адаптер для подвижной подножки;
- 3.48 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 3.49 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 3.50 Пластиковая часть опоры бедра, медиально / латерально, +4 см, размер 1, 2, 3;
- 3.51 Опора бедра, медиально / латерально, + 4 см, размеры 1, 2, 3;
- 3.52 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 3.53 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.54 Высокие бортики для отдельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.55 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 3.56 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 3.57 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 3.58 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 3.59 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 3.60 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 3.61 Адаптер сиденья 285175;
- 3.62 Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro;
- 3.63 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 3.64 Мобиль;
- 3.65 Капюшон;
- 3.66 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 3.67 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 3.68 Ручка для сопровождающего лица 844015;
- 3.69 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 3.70 Подушка спинки Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.71 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Delfi Pro;
- 3.72 Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro

4К модели Zitzi Delfi Pro Pengy:

- 4.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.2 Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.3 Подголовник Pro Standard, размер 1, 2;
- 4.4 Подголовник Pro Standard удлиненный, размер 1, 2;
- 4.5 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 4.6 Подголовник Pro Junior;
- 4.7 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 4.8 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.9 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 4.10 Регулируемое крепление подголовника;
- 4.11 Активная повязка для лба Zitzi;
- 4.12 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 4.13 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;

- 4.14 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.15 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 4.16 Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro;
- 4.17 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.18 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.19 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.20 Грудной ремень Zitzi Delfi Pro;
- 4.21 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 4.22 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.23 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 4.24 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.25 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 4.26 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 4.27 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.28 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 4.29 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 4.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 4.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 4.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 4.33 Опора для предплечья;
- 4.34 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 4.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.36 Столик откидной Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 4.37 Столик с усиленными крепежами Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 4.38 Защитное покрытие на столик, размер 1, 2;
- 4.39 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 4.40 Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
- 4.41 Регулируемая единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 4.42 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 4.43 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.44 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.45 Откидные регулируемые подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.46 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.47 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 4.48 Адаптер для подвижной подножки;
- 4.49 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 4.50 Опора для икр Pengy;
- 4.51 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 4.52 Пластиковая часть опоры бедра, медиально / латерально, +4 см, размер 1, 2, 3;
- 4.53 Опора бедра, медиально / латерально, + 4 см, размеры 1, 2, 3;
- 4.54 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 4.55 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.56 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.57 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;

- 4.58 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 4.59 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 4.60 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 4.61 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 4.62 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 4.63 Адаптер сиденья 285175;
- 4.64 Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro;
- 4.65 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 4.66 Мобиль;
- 4.67 Капюшон;
- 4.68 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 4.69 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 4.70 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 4.71 Передние колеса цельнолитные Pengy, диаметр 20 см, 30 см;
- 4.72 Передние колеса цельнолитные Guppy, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
- 4.73 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 4.74 Педаль тормоза Pengy, пластиковая;
- 4.75 Подушка спинки Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.76 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Delfi Pro;
- 4.77 Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro;
- 4.78 Корзинка
- 4.79 Набор кронштейнов для транспортировки

5 К модели Zitzi Delfi Pro Guppy:

- 5.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.2 Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.3 Подголовник Pro Standard, размер 1, 2;
- 5.4 Подголовник Pro Standard удлиненный, размер 1, 2;
- 5.5 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 5.6 Подголовник Pro Junior;
- 5.7 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 5.8 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.9 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 5.10 Регулируемое крепление подголовника;
- 5.11 Активная повязка для лба Zitzi;
- 5.12 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 5.13 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 5.14 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.15 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 5.16 Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro;
- 5.17 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.18 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;

- 5.19 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.20 Грудной ремень Zitzi Delfi Pro;
- 5.21 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 5.22 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.23 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 5.24 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.25 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 5.26 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 5.27 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.28 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 5.29 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 5.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 5.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 5.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 5.33 Подлокотник Guppy;
- 5.34 Опора для предплечья;
- 5.35 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 5.36 Крепеж подлокотника Guppy;
- 5.37 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.38 Столик откидной Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 5.39 Столик с усиленными крепежами Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 5.40 Защитное покрытие на столик, размер 1, 2;
- 5.41 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 5.42 Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
- 5.43 Регулируемая единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 5.44 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 5.45 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.46 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.47 Откидные регулируемые подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.48 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.49 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 5.50 Адаптер для подвижной подножки;
- 5.51 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 5.52 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 5.53 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 5.54 Пластиковая часть опоры бедра, медиально / латерально, +4 см, размеры 1, 2, 3;
- 5.55 Опора бедра, медиально / латерально, + 4 см, размеры 1, 2, 3;
- 5.56 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 5.57 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.58 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.59 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 5.60 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 5.61 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 5.62 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;

- 5.63 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 5.64 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 5.65 Адаптер сиденья;
- 5.66 Адаптер сиденья 285175;
- 5.67 Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro;
- 5.68 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 5.69 Мобиль;
- 5.70 Капюшон;
- 5.71 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 5.72 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 5.73 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 5.74 Набор кронштейнов для транспортировки;
- 5.75 Ручка откидывания;
- 5.76 Передние колеса цельнолитные Guppy, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
- 5.77 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.78 Задние колеса пневматические, диаметр 30 см, 40 см;
- 5.79 Задние колеса пневматические Guppy, 40 см;
- 5.80 Задние колеса пневматические Guppy, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.81 Антипрокидыватель Guppy; Защита спиц, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.82 Вилка переднего колеса;
- 5.83 Ось быстросъемного колеса, размер 1, 2;
- 5.84 Барабанный тормоз левый/правый, размер 1, 2;
- 5.85 Крепеж брызговиков, размер 1, 2, 3;
- 5.86 Ручка тормоза с красным стопорным механизмом;
- 5.87 Трос ручного тормоза, Seabass, Guppy;
- 5.88 Стояночные тормоза;
- 5.89 Крепление для стояночного тормоза для колес, размер 1, 2, 3;
- 5.90 Крепеж стояночного тормоза;
- 5.91 Зубчатая муфта;
- 5.92 Подушка спинки Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.93 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Delfi Pro;
- 5.94 Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro;
- 5.95 Упор для сопровождающего лица Guppy.

6К модели Zitzi Delfi Pro Seabass Pro:

- 6.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.2 Боковая поддержка откидная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.3 Подголовник Pro Standard, размер 1, 2;
- 6.4 Подголовник Pro Standard удлиненный, размер 1, 2;
- 6.5 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 6.6 Подголовник Pro Junior;
- 6.7 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;

- 6.8 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.9 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 6.10 Регулируемое крепление подголовника;
- 6.11 Активная повязка для лба Zitzi;
- 6.12 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 6.13 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 6.14 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.15 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 6.16 Нижний крепежный кронштейн Zitzi Delfi Pro;
- 6.17 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.18 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.19 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.20 Грудной ремень Zitzi Delfi Pro;
- 6.21 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 6.22 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.23 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 6.24 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.25 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 6.26 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 6.27 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.28 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 6.29 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 6.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 6.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L);
- 6.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 6.33 Подлокотник, размеры 1, 2, 3;
- 6.34 Опора для предплечья;
- 6.35 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 6.36 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.37 Столик откидной Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 6.38 Столик с усиленными крепежами Zitzi Delfi Pro, размер 2, 3;
- 6.39 Защитное покрытие на столик, размер 1, 2;
- 6.40 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.41 Единая подножка Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.42 Регулируемая единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 6.43 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 6.44 Откидная единая подножка Seabass Pro;
- 6.45 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.46 Раздельные подножки Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.47 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.48 Откидные раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.49 Откидные регулируемые подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.50 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.51 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;

- 6.52 Адаптер для подвижной подножки;
- 6.53 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 6.54 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 6.55 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 6.56 Пластиковая часть опоры бедра, медиально / латерально, +4 см, размеры 1, 2, 3;
- 6.57 Опора бедра, медиально / латерально, + 4 см, размеры 1, 2, 3;
- 6.58 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 6.59 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.60 Высокие бортики для отдельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.61 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 6.62 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 6.63 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 6.64 Подушка сиденья Алякантара, размеры 1, 2, 3;
- 6.65 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 6.66 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 6.67 Адаптер сиденья;
- 6.68 Адаптер сиденья 285175;
- 6.69 Адаптер сиденья Zitzi Delfi Pro;
- 6.70 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 6.71 Мобиль;
- 6.72 Капюшон;
- 6.73 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 6.74 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 6.75 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 6.76 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 6.77 Ручка для сопровождающего лица Seabass Pro;
- 6.78 Набор кронштейнов для транспортировки;
- 6.79 Ручка откидывания;
- 6.80 Передние колеса цельнолитные Seabass Pro, диаметр 15 см, 18 см; Передние колеса пневматические, 18 см;
- 6.81 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 6.82 Задние колеса пневматические, диаметр 30 см, 40 см;
- 6.83 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 6.84 Защита спиц, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 6.85 Брызговик, размер 1, 2, 3;
- 6.86 Ручка тормоза с красным стопорным механизмом;
- 6.87 Трос ручного тормоза, Seabass, Guppy;
- 6.88 Стояночные тормоза;
- 6.89 Крепление для стояночного тормоза для колес, размер 1, 2, 3;
- 6.90 Крепеж стояночного тормоза;
- 6.91 Подушка спинки Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.92 Подушка спинки из Алякантары Zitzi Delfi Pro;
- 6.93 Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro;
- 6.94 Упор для сопровождающего лица Seabass Pro

II. Кресла-коляски Zitzi Pengy: модели Zitzi Pengy Flipper Pro, Zitzi Pengy Flipper Pro Flex, Zitzi Pengy Snapper, Zitzi Pengy Pengy

Принадлежности:

1. К модели Zitzi Pengy Flipper Pro:

- 1.1 Подголовник Pengy, размер 1, 2;
- 1.2 Подголовник Pengy удлиненный, размер 1, 2;
- 1.3 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.4 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.5 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.6 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.7 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.8 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.9 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 1.10 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.11 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 1.12 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 1.13 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.14 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 1.15 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 1.16 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 1.17 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.18 Столик Pengy;
- 1.19 Единая подножка Pengy;
- 1.20 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 1.21 Покрывало опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 1.22 Подножка МН;
- 1.23 Базовая платформа адаптера Pengy;
- 1.24 Капюшон Pengy;
- 1.25 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 1.26 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 1.27 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 1.28 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 1.29 Педаль (для регулировки высоты);
- 1.30 Подушка спинки Coolmax;
- 1.31 Дождевик

2. К модели Zitzi Pengy Flipper Pro Flex:

- 2.1 Подголовник Pengy, размер 1, 2;

- 2.2 Подголовник Pengy удлиненный, размер 1, 2;
- 2.3 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.4 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.5 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.6 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.7 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.8 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.9 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 2.10 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.11 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 2.12 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 2.13 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.14 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 2.15 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 2.16 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 2.17 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 2.18 Столик Pengy;
- 2.19 Единая подножка Pengy;
- 2.20 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 2.21 Покрывало опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 2.22 Подножка МН;
- 2.23 Базовая платформа адаптера Pengy;
- 2.24 Капюшон Pengy;
- 2.25 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 2.26 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 2.27 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 2.28 Ручка для сопровождающего лица 844230;
- 2.29 Ручка для сопровождающего лица 844012;
- 2.30 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 2.31 Педаль (для регулировки высоты);
- 2.32 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 2.33 Задние колеса цельнолитные Flipper Pro Flex, диаметр 30 см, 40 см;
- 2.34 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 2.35 Подушка спинки Coolmax;
- 2.36 Дождевик

3. К модели Zitzi Pengy Snapper:

- 3.1 Подголовник Pengy, размер 1, 2;
- 3.2 Подголовник Pengy удлиненный, размер 1, 2;
- 3.3 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.4 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.5 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;

- 3.6 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.7 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.8 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.9 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 3.10 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.11 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 3.12 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 3.13 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.14 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 3.15 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 3.16 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 3.17 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 3.18 Столик Pengy;
- 3.19 Единая подножка Pengy;
- 3.20 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 3.21 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 3.22 Подножка МН;
- 3.23 Базовая платформа адаптера Pengy;
- 3.24 Капюшон Pengy;
- 3.25 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 3.26 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 3.27 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 3.28 Ручка для сопровождающего лица 844015;
- 3.29 Подушка спинки Coolmax;
- 3.30 Дождевик

4. К модели Zitzi Pengy Pengy:

- 4.1 Подголовник Pengy, размер 1, 2;
- 4.2 Подголовник Pengy удлиненный, размер 1, 2;
- 4.3 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.4 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.5 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.6 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.7 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.8 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.9 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 4.10 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.11 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 4.12 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 4.13 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.14 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 4.15 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;

- 4.16 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 4.17 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 4.18 Столик Pengy;
- 4.19 Единая подножка Pengy;
- 4.20 Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
- 4.21 Опора для икр Pengy;
- 4.22 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 4.23 Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
- 4.24 Подножка МН;
- 4.25 Базовая платформа адаптера Pengy;
- 4.26 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 4.27 Капюшон Pengy;
- 4.28 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 4.29 Передние колеса цельнолитные Pengy, диаметр 20 см, 30 см;
- 4.30 Передние колеса цельнолитные Guppy, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
- 4.31 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 4.32 Педаль тормоза Pengy, пластиковая;
- 4.33 Подушка спинки Coolmax;
- 4.34 Корзинка;
- 4.35 Дождевик

III Кресла-коляски Zitzi Sharky Pro: модели Zitzi Sharky Pro Flipper Pro, Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex, Zitzi Sharky Pro Snapper, Zitzi Sharky Pro Seabass Pro.

Принадлежности:

1. К модели Zitzi Sharky Pro Flipper Pro:

- 1.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.2 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.3 Боковая поддержка откидная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.4 Усиленная основа боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.5 Крепеж боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, складной;
- 1.6 Подголовник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 2 удлиненный;
- 1.7 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 1.8 Подголовник Pro Serie Adult;
- 1.9 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.10 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 1.11 Подголовник Black Bear, размеры – стандартный, удлиненный;
- 1.12 Регулируемое крепление подголовника;
- 1.13 Активная повязка для лба Zitzi;
- 1.14 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 1.15 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;

- 1.16 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 1.17 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.18 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 1.19 Нижний крепежный кронштейн;
- 1.20 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.21 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.22 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.23 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 1.24 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.25 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.26 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 1.27 Бедренный анитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.28 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 1.29 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 1.30 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.31 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.32 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 1.33 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 1.34 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 1.35 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.36 Ремни для ног, размер 1, 2;
- 1.37 Подлокотник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.38 Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный, размер 1, 2;
- 1.39 Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной, размер 1, 2;
- 1.40 Опора для предплечья;
- 1.41 Покрытие опоры для предплечья;
- 1.42 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 1.43 Крепежи опоры для предплечья левый/правый;
- 1.44 Крепеж подлокотника складной;
- 1.45 Крепеж подлокотника фиксированный;
- 1.46 Крепеж подлокотника, левый/правый;
- 1.47 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.48 Столик откидной Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.49 Столик с усиленными крепежами Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.50 Крепеж столика, складной;
- 1.51 Крепеж столика усиленный, складной;
- 1.52 Запорное устройство для столика левое/правое;
- 1.53 Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 1.54 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.55 Откидные раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.56 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 1.57 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 1.58 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 1.59 Пластиковая часть опоры бедра усиленная, правая и левая, размеры 1, 2;

- 1.60 Пластиковая часть опоры бедра, левая / правая, размеры 1, 2;
- 1.61 Покрытие опоры бедра Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.62 Опора для стопы левая/правая, размер 1, 2;
- 1.63 Крепеж подножек;
- 1.64 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 1.65 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 1.66 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 1.67 Подушка сиденья Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 1.68 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 1.69 Пластина адаптера Sharky Pro;
- 1.70 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 1.71 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 1.72 Капюшон;
- 1.73 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 1.74 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 1.75 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 1.76 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 1.77 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 1.78 Ручка М6х25;
- 1.79 Педаль (для регулировки высоты);
- 1.80 Петля для регулировки наклона сиденья, размеры 1, 2;
- 1.81 Профиль спинки, размер 1, 2;
- 1.82 Пластиковая часть спинки, размер 1, 2;
- 1.83 Подушка спинки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 1.84 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.85 Поддержка поясницы Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.86 Пластина, регулируемая по глубине, размер 1, 2

2. К модели Zitzi Sharky Pro Flipper Pro Flex:

- 2.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.2 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.3 Боковая поддержка откидная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.4 Усиленная основа боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.5 Крепеж боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, складной;
- 2.6 Подголовник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 2 удлиненный;
- 2.7 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 2.8 Подголовник Pro Serie Adult;
- 2.9 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.10 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 2.11 Подголовник Black Bear, размеры – стандартный, удлиненный;
- 2.12 Регулируемое крепление подголовника;
- 2.13 Активная повязка для лба Zitzi;
- 2.14 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;

- 2.15 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 2.16 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 2.17 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.18 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 2.19 Нижний крепежный кронштейн;
- 2.20 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.21 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.22 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.23 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 2.24 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.25 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.26 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 2.27 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.28 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 2.29 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 2.30 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.31 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 2.32 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 2.33 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 2.34 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 2.35 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 2.36 Ремни для ног, размер 1, 2;
- 2.37 Подлокотник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.38 Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный, размер 1, 2;
- 2.39 Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной, размер 1, 2;
- 2.40 Опора для предплечья;
- 2.41 Покрытие опоры для предплечья;
- 2.42 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 2.43 Крепежи опоры для предплечья левый/правый;
- 2.44 Крепеж подлокотника складной;
- 2.45 Крепеж подлокотника фиксированный;
- 2.46 Крепеж подлокотника, левый/правый;
- 2.47 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.48 Столик откидной Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.49 Столик с усиленными крепежами Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.50 Крепеж столика, складной;
- 2.51 Крепеж столика усиленный, складной;
- 2.52 Запорное устройство для столика левое/правое;
- 2.53 Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 2.54 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.55 Откидные раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.56 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 2.57 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 2.58 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;

- 2.59 Пластиковая часть опоры бедра усиленная, правая и левая, размеры 1, 2;
- 2.60 Пластиковая часть опоры бедра, левая / правая, размеры 1, 2;
- 2.61 Покрытие опоры бедра Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.62 Опора для стопы левая/правая, размер 1, 2;
- 2.63 Крепеж подножек;
- 2.64 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 2.65 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 2.66 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 2.67 Подушка сиденья Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 2.68 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 2.69 Пластина адаптера Sharky Pro;
- 2.70 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 2.71 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 2.72 Капюшон;
- 2.73 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 2.74 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 2.75 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 2.76 Ручка для сопровождающего лица 844230;
- 2.77 Ручка для сопровождающего лица 844012;
- 2.78 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 2.79 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 2.80 Ручка М6х25;
- 2.81 Педаль (для регулировки высоты);
- 2.82 Петля для регулировки наклона сиденья, размеры 1, 2;
- 2.83 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 2.84 Задние колеса цельнолитные Flipper Pro Flex, диаметр 30 см, 40 см;
- 2.85 Антиопрокидыватель, правый/левый;
- 2.86 Профиль спинки, размер 1, 2;
- 2.87 Пластиковая часть спинки, размер 1, 2;
- 2.88 Подушка спинки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 2.89 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.90 Поддержка поясницы Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.91 Пластина, регулируемая по глубине, размер 1, 2

3. К модели Zitzi Sharky Pro Snapper:

- 3.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.2 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.3 Боковая поддержка откидная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.4 Усиленная основа боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.5 Крепеж боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, складной;
- 3.6 Подголовник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 2 удлиненный;
- 3.7 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;

- 3.8 Подголовник Pro Serie Adult;
- 3.9 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.10 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 3.11 Подголовник Black Bear, размеры – стандартный, удлиненный;
- 3.12 Регулируемое крепление подголовника;
- 3.13 Активная повязка для лба Zitzi;
- 3.14 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 3.15 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 3.16 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 3.17 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.18 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 3.19 Нижний крепежный кронштейн;
- 3.20 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.21 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.22 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.23 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 3.24 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.25 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.26 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 3.27 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.28 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 3.29 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 3.30 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.31 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 3.32 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 3.33 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L);
- 3.34 Браслет, размер 1 (S), 2 (L);
- 3.35 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 3.36 Ремни для ног, размер 1, 2;
- 3.37 Подлокотник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.38 Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный, размер 1, 2;
- 3.39 Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной, размер 1, 2;
- 3.40 Опора для предплечья;
- 3.41 Покрытие опоры для предплечья;
- 3.42 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 3.43 Крепежи опоры для предплечья левый/правый;
- 3.44 Крепеж подлокотника складной;
- 3.45 Крепеж подлокотника фиксированный;
- 3.46 Крепеж подлокотника, левый/правый;
- 3.47 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.48 Столик откидной Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.49 Столик с усиленными крепежами Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.50 Крепеж столика, складной;
- 3.51 Крепеж столика усиленный, складной;

- 3.52 Запорное устройство для столика левое/правое;
- 3.53 Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 3.54 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.55 Откидные раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.56 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 3.57 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 3.58 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 3.59 Пластиковая часть опоры бедра усиленная, правая и левая, размеры 1, 2;
- 3.60 Пластиковая часть опоры бедра, левая / правая, размеры 1, 2;
- 3.61 Покрывало опоры бедра Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.62 Опора для стопы левая/правая, размер 1, 2;
- 3.63 Крепеж подножек;
- 3.64 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 3.65 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 3.66 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 3.67 Подушка сиденья Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 3.68 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 3.69 Пластина адаптера Sharky Pro;
- 3.70 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 3.71 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 3.72 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 3.73 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 3.74 Капюшон;
- 3.75 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 3.76 Ручка для сопровождающего лица 844015;
- 3.77 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 3.78 Ручка М6х25;
- 3.79 Петля для регулировки наклона сиденья, размеры 1, 2;
- 3.80 Профиль спинки, размер 1, 2;
- 3.81 Пластиковая часть спинки, размер 1, 2;
- 3.82 Подушка спинки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 3.83 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.84 Поддержка поясницы Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.85 Пластина, регулируемая по глубине, размер 1, 2

4. К модели Zitzi Sharky Pro Seabass Pro:

- 4.1 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.2 Боковая поддержка фиксированная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.3 Боковая поддержка откидная Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.4 Усиленная основа боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.5 Крепеж боковой поддержки Zitzi Sharky Pro, складной;
- 4.6 Подголовник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2, 2 удлиненный;

- 4.7 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 4.8 Подголовник Pro Serie Adult;
- 4.9 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.10 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 4.11 Подголовник Black Bear, размеры – стандартный, удлиненный;
- 4.12 Регулируемое крепление подголовника;
- 4.13 Активная повязка для лба Zitzi;
- 4.14 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 4.15 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 4.16 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 4.17 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.18 Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
- 4.19 Нижний крепежный кронштейн;
- 4.20 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.21 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.22 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.23 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 4.24 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.25 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.26 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 4.27 Бедренный анитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.28 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 4.29 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 4.30 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.31 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 4.32 Поддержка таза, размер 1, 2;
- 4.33 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 4.34 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 4.35 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 4.36 Ремни для ног, размер 1, 2;
- 4.37 Подлокотник, размеры 1, 2, 3;
- 4.38 Подлокотник Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.39 Подлокотник Zitzi Sharky Pro фиксированный, размер 1, 2;
- 4.40 Подлокотник Zitzi Sharky Pro откидной, размер 1, 2;
- 4.41 Опора для предплечья;
- 4.42 Покрытие опоры для предплечья;
- 4.43 Подлокотная опора, размеры 1, 2, 3;
- 4.44 Крепежи опоры для предплечья левый/правый;
- 4.45 Крепеж подлокотника складной;
- 4.46 Крепеж подлокотника фиксированный;
- 4.47 Крепеж подлокотника, левый/правый;
- 4.48 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.49 Столик откидной Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.50 Столик с усиленными крепежами Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;

- 4.51 Крепеж столика, складной;
- 4.52 Крепеж столика усиленный, складной;
- 4.53 Запорное устройство для столика левое/правое;
- 4.54 Единая подножка Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 4.55 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 4.56 Откидная единая подножка Seabass Pro;
- 4.57 Раздельные подножки Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 4.58 Раздельные подножки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 4.59 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.60 Откидные раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.61 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 4.62 Адаптер для подвижной подножки;
- 4.63 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 4.64 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 4.65 Пластиковая часть опоры бедра усиленная, правая и левая, размеры 1, 2;
- 4.66 Пластиковая часть опоры бедра, левая / правая, размеры 1, 2;
- 4.67 Покрытие опоры бедра Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.68 Опора для стопы левая/правая, размер 1, 2;
- 4.69 Крепеж подножек;
- 4.70 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.71 Непромокаемое покрытие, размер 1, 2, 3;
- 4.72 Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
- 4.73 Подушка сиденья T-foam, размеры 1, 2, 3;
- 4.74 Подушка сиденья Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 4.75 Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
- 4.76 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 4.77 Пластина адаптера Sharky Pro;
- 4.78 Пластина адаптера с внешней резьбой;
- 4.79 Адаптер сиденья универсальный;
- 4.80 Зимний мешок, размер 1, 2, 3, 4, 5;
- 4.81 Капюшон;
- 4.82 Газовая пружина, 185 мм/200 Н, 205мм/300 Н, 185мм/500 Н;
- 4.83 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 4.84 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 4.85 Ручка для сопровождающего лица Seabass Pro;
- 4.86 Ручка М6х25;
- 4.87 Набор кронштейнов для транспортировки;
- 4.88 Ручка откидывания;
- 4.89 Петля для регулировки наклона сиденья, размеры 1, 2;
- 4.90 Передние колеса цельнолитные Seabass Pro, диаметр 15 см, 18 см;
- 4.91 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 4.92 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 4.93 Антиопрокидыватель, правый/левый;
- 4.94 Защита спиц, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;

- 4.95 Брызговик, размер 1, 2, 3;
- 4.96 Ручка тормоза с красным стопорным механизмом;
- 4.97 Трос ручного тормоза, Seabass, Guppy;
- 4.98 Стояночные тормоза;
- 4.99 Крепление для стояночного тормоза для колес, размер 1, 2, 3;
- 4.100 Крепеж стояночного тормоза;
- 4.101 Профиль спинки, размер 1, 2;
- 4.102 Пластиковая часть спинки, размер 1, 2;
- 4.103 Подушка спинки Zitzi Sharky Pro, размеры 1, 2;
- 4.104 Подушка спинки из Алькантары Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.105 Поддержка поясницы Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.106 Пластина, регулируемая по глубине, размер 1, 2;
- 4.107 Упор для сопровождающего лица Seabass Pro

IV. Кресла-коляски Anatomic Sits: модели Anatomic Sits Flipper Pro, Anatomic Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Sits Snapper, Anatomic Sits Pengy, Anatomic Sits Guppy, Anatomic Sits Seabass Pro

Принадлежности:

1. К модели Anatomic Sits Flipper Pro:

- 1.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 1.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 1.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 1.4 Подголовник Pro Junior;
- 1.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 1.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 1.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 1.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 1.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 1.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 1.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 1.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 1.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 1.16 Крепление для подголовника;
- 1.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 1.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);

- 1.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 1.26 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 1.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 1.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 1.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.33 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.34 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.35 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 1.36 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 1.37 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.38 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.39 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 1.40 Адаптер для подвижной подножки;
- 1.41 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 1.42 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 1.43 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 1.44 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.45 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.46 Подушка сиденья Coolmax;
- 1.47 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 1.48 Адаптер сиденья универсальный;
- 1.49 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 1.50 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 1.51 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 1.52 Педаль (для регулировки высоты);
- 1.53 Вертикальная рама

2. К модели Anatomic Sits Flipper Pro Flex:

- 2.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 2.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 2.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 2.4 Подголовник Pro Junior; Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 2.5 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 2.6 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.7 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 2.8 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.9 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;

- 2.10 Регулируемое крепление подголовника;
- 2.11 Активная повязка для лба Zitzi;
- 2.12 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 2.13 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 2.14 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 2.15 Крепление для подголовника;
- 2.16 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 2.17 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.18 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.19 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.20 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.21 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 2.22 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.23 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.24 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 2.25 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.26 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 2.27 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 2.28 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.29 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 2.30 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 2.31 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 2.32 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.33 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.34 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 2.35 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 2.36 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.37 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.38 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 2.39 Адаптер для подвижной подножки;
- 2.40 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 2.41 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 2.42 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 2.43 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.44 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.45 Подушка сиденья Coolmax;
- 2.46 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 2.47 Адаптер сиденья универсальный;
- 2.48 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 2.49 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 2.50 Ручка для сопровождающего лица 844230;
- 2.51 Ручка для сопровождающего лица 844012;
- 2.52 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 2.53 Педаль (для регулировки высоты);

- 2.54 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 2.55 Задние колеса цельнолитные Flipper Pro Flex, диаметр 30 см, 40 см;
- 2.56 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 2.57 Вертикальная рама

3. К модели Anatomic Sits Snapper:

- 3.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 3.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 3.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 3.4 Подголовник Pro Junior;
- 3.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 3.6 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 3.7 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 3.8 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.9 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 3.10 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.11 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 3.12 Регулируемое крепление подголовника;
- 3.13 Активная повязка для лба Zitzi;
- 3.14 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 3.15 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 3.16 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 3.17 Крепление для подголовника;
- 3.18 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 3.19 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.20 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.21 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.22 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.23 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 3.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 3.26 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 3.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 3.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 3.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 3.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 3.33 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.34 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.35 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 3.36 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;

- 3.37 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.38 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.39 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 3.40 Адаптер для подвижной подножки;
- 3.41 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 3.42 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 3.43 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 3.44 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.45 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.46 Подушка сиденья Coolmax;
- 3.47 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 3.48 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 3.49 Адаптер сиденья универсальный;
- 3.50 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 3.51 Ручка для сопровождающего лица 844015;
- 3.52 Вертикальная рама

4. К модели Anatomic Sits Pengy:

- 4.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 4.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 4.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 4.4 Подголовник Pro Junior;
- 4.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 4.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 4.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 4.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 4.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 4.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 4.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 4.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 4.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 4.16 Крепление для подголовника;
- 4.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 4.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 4.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;

- 4.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 4.26 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 4.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 4.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 4.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 4.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 4.33 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.34 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.35 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 4.36 Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
- 4.37 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 4.38 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.39 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.40 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 4.41 Адаптер для подвижной подножки;
- 4.42 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 4.43 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 4.44 Опора для икр Pengy;
- 4.45 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 4.46 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.47 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.48 Подушка сиденья Coolmax;
- 4.49 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 4.50 Адаптер сиденья универсальный;
- 4.51 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 4.52 Передние колеса цельнолитные Pengy, диаметр 20 см, 30 см;
- 4.53 Передние колеса цельнолитные Guppy, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
- 4.54 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 4.55 Педаль тормоза Pengy, пластиковая;
- 4.56 Корзинка;
- 4.57 Вертикальная рама

5. К модели Anatomic Sits Guppy:

- 5.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 5.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 5.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 5.4 Подголовник Pro Junior;
- 5.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 5.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 5.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;

- 5.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 5.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 5.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 5.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 5.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 5.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 5.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 5.16 Крепление для подголовника;
- 5.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 5.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 5.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 5.26 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 5.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 5.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 5.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 5.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 5.33 Подлокотник Guppy;
- 5.34 Крепеж подлокотника Guppy;
- 5.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.36 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 5.37 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 5.38 Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
- 5.39 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 5.40 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.41 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.42 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 5.43 Адаптер для подвижной подножки;
- 5.44 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 5.45 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 5.46 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 5.47 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.48 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.49 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 5.50 Адаптер сиденья универсальный;
- 5.51 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;

- 5.52 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 5.53 Набор кронштейнов для транспортировки;
- 5.54 Ручка откидывания;
- 5.55 Передние колеса цельнолитные Gupru, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
- 5.56 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.57 Задние колеса пневматические, диаметр 30 см, 40 см;
- 5.58 Задние колеса пневматические Gupru, 40 см;
- 5.59 Задние колеса пневматические Gupru, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.60 Антипрокидыватель Gupru;
- 5.61 Защита спиц, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.62 Вилка переднего колеса;
- 5.63 Ось быстросъемного колеса, размер 1, 2;
- 5.64 Барабанный тормоз левый/правый, размер 1, 2;
- 5.65 Крепеж брызговиков, размер 1, 2, 3;
- 5.66 Ручка тормоза с красным стопорным механизмом;
- 5.67 Трос ручного тормоза, Seabass, Gupru;
- 5.68 Стояночные тормоза;
- 5.69 Крепление для стояночного тормоза для колес, размер 1, 2, 3;
- 5.70 Крепеж стояночного тормоза;
- 5.71 Зубчатая муфта;
- 5.72 Упор для сопровождающего лица Gupru;
- 5.73 Вертикальная рама

6.К модели Anatomic Sits Seabass Pro:

- 6.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 6.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 6.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 6.4 Подголовник Pro Junior;
- 6.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 6.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 6.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 6.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 6.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 6.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 6.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 6.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 6.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 6.16 Крепление для подголовника;
- 6.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 6.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;

- 6.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 6.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 6.26 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 6.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 6.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.30 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 6.31 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 6.32 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 6.33 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 6.34 Подлокотник, размеры 1, 2, 3;
- 6.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.36 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 6.37 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.38 Единая подножка Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.39 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 6.40 Откидная единая подножка Seabass Pro;
- 6.41 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.42 Раздельные подножки Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.43 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.44 Откидные раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.45 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.46 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 6.47 Адаптер для подвижной подножки;
- 6.48 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 6.49 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 6.50 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 6.51 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.52 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.53 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 6.54 Адаптер сиденья универсальный;
- 6.55 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 6.56 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 6.57 Ручка для сопровождающего лица Seabass Pro;
- 6.58 Набор кронштейнов для транспортировки;
- 6.59 Ручка откидывания;
- 6.60 Передние колеса цельнолитные Seabass Pro, диаметр 15 см, 18 см;
- 6.61 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 6.62 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;

- 6.63 Задние колеса пневматические, диаметр 30 см, 40 см;
- 6.64 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 6.65 Защита спиц, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 6.66 Брызговик, размер 1, 2, 3;
- 6.67 Трос ручного тормоза, Seabass, Guppy;
- 6.68 Стояночные тормоза;
- 6.69 Крепление для стояночного тормоза для колес, размер 1, 2, 3;
- 6.70 Крепеж стояночного тормоза;
- 6.71 Упор для сопровождающего лица Seabass Pro;
- 6.72 Вертикальная рама

- V. Кресла-коляски Anatomic Soft Sits: модели Anatomic Soft Sits Flipper Pro, Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex, Anatomic Soft Sits Snapper, Anatomic Soft Sits Pengy, Anatomic Soft Sits Guppy, Anatomic Soft Sits Seabass Pro

Принадлежности:

1. К модели Anatomic Soft Sits Flipper Pro:

- 1.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 1.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 1.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 1.4 Подголовник Pro Junior;
- 1.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 1.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 1.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 1.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 1.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 1.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 1.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 1.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 1.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 1.16 Крепление для подголовника;
- 1.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 1.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 1.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;

- 1.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 1.26 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 1.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 1.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 1.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 1.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 1.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 1.33 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 1.34 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 1.35 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 1.36 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 1.37 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.38 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 1.39 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 1.40 Адаптер для подвижной подножки;
- 1.41 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 1.42 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 1.43 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 1.44 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.45 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 1.46 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 1.47 Адаптер сиденья универсальный;
- 1.48 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 1.49 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 1.50 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 1.51 Педаль (для регулировки высоты);
- 1.52 Вертикальная рама

2. К модели Anatomic Soft Sits Flipper Pro Flex:

- 2.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 2.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 2.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 2.4 Подголовник Pro Junior;
- 2.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 2.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 2.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 2.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 2.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 2.12 Активная повязка для лба Zitzi;

- 2.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 2.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 2.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 2.16 Крепление для подголовника;
- 2.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 2.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 2.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 2.26 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 2.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 2.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 2.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 2.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 2.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 2.33 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 2.34 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 2.35 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 2.36 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 2.37 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.38 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 2.39 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 2.40 Адаптер для подвижной подножки;
- 2.41 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 2.42 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 2.43 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 2.44 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.45 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 2.46 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 2.47 Адаптер сиденья универсальный;
- 2.48 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 2.49 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 2.50 Ручка для сопровождающего лица 844230;
- 2.51 Ручка для сопровождающего лица 844012;
- 2.52 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 2.53 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 2.54 Задние колеса цельнолитные Flipper Pro Flex, диаметр 30 см, 40 см;
- 2.55 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 2.56 Вертикальная рама

3. К модели Anatomic Soft Sits Snapper:

- 3.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 3.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 3.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 3.4 Подголовник Pro Junior;
- 3.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 3.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 3.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 3.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 3.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 3.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 3.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 3.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 3.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 3.16 Крепление для подголовника;
- 3.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 3.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 3.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 3.26 Бедренный анитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 3.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 3.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 3.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 3.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 3.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 3.33 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 3.34 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 3.35 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 3.36 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 3.37 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.38 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 3.39 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 3.40 Адаптер для подвижной подножки;
- 3.41 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;

- 3.42 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 3.43 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 3.44 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.45 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 3.46 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 3.47 Адаптер сиденья универсальный;
- 3.48 Ручка для толкания, размер 1, 2;
- 3.49 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 3.50 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 3.51 Педаль (для регулировки высоты);
- 3.52 Вертикальная рама

4 К модели Anatomic Soft Sits Pengy:

- 4.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 4.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 4.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 4.4 Подголовник Pro Junior;
- 4.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 4.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 4.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 4.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 4.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 4.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 4.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 4.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 4.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 4.16 Крепление для подголовника;
- 4.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 4.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 4.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 4.26 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 4.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 4.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 4.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;

- 4.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 4.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 4.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 4.33 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 4.34 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 4.35 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 4.36 Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
- 4.37 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 4.38 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.39 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 4.40 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 4.41 Адаптер для подвижной подножки;
- 4.42 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 4.43 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 4.44 Опора для икр Pengy;
- 4.45 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 4.46 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.47 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 4.48 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 4.49 Адаптер сиденья универсальный;
- 4.50 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 4.51 Передние колеса цельнолитные Pengy, диаметр 20 см, 30 см;
- 4.52 Передние колеса цельнолитные Guppy, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
- 4.53 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 4.54 Педаль тормоза Pengy, пластиковая;
- 4.55 Корзинка;
- 4.56 Вертикальная рама

5 К модели Anatomic Soft Sits Guppy:

- 5.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 5.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 5.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 5.4 Подголовник Pro Junior;
- 5.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 5.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 5.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 5.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 5.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 5.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 5.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 5.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;

- 5.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 5.16 Крепление для подголовника;
- 5.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 5.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 5.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
- 5.26 Бедренный антитротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 5.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 5.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 5.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.30 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 5.31 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 5.32 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
- 5.33 Подлокотник Guppy;
- 5.34 Крепеж подлокотника Guppy;
- 5.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 5.36 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 5.37 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 5.38 Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
- 5.39 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 5.40 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.41 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 5.42 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 5.43 Адаптер для подвижной подножки;
- 5.44 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 5.45 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 5.46 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 5.47 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.48 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 5.49 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 5.50 Адаптер сиденья универсальный;
- 5.51 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 5.52 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 5.53 Набор кронштейнов для транспортировки;
- 5.54 Ручка откидывания;
- 5.55 Передние колеса цельнолитные Guppy, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
- 5.56 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.57 Задние колеса пневматические, диаметр 30 см, 40 см;
- 5.58 Задние колеса пневматические Guppy, 40 см;

- 5.59 Задние колеса пневматические Gupru, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.60 Антипрокидыватель Gupru;
- 5.61 Защита спиц, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 5.62 Вилка переднего колеса;
- 5.63 Ось быстросъемного колеса, размер 1, 2;
- 5.64 Барабанный тормоз левый/правый, размер 1, 2;
- 5.65 Крепеж брызговиков, размер 1, 2, 3;
- 5.66 Ручка тормоза с красным стопорным механизмом;
- 5.67 Трос ручного тормоза, Seabass, Gupru;
- 5.68 Стояночные тормоза;
- 5.69 Крепление для стояночного тормоза для колес, размер 1, 2, 3;
- 5.70 Крепеж стояночного тормоза;
- 5.71 Зубчатая муфта;
- 5.72 Упор для сопровождающего лица Gupru;
- 5.73 Вертикальная рама

6 К модели Anatomic Soft Sits Seabass Pro:

- 6.1 Подголовник Pro Mini, размер 1, 2, 3;
- 6.2 Подголовник Pro Serie Adult;
- 6.3 Подголовник Pro Serie Adult Anatomic Sits;
- 6.4 Подголовник Pro Junior;
- 6.5 Подголовник Pro Junior Anatomic Sits;
- 6.6 Подголовник Pro Single, взрослый, детский;
- 6.7 Подголовник Pro Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.8 Подголовник Pro Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 6.9 Подголовник LINX Plush, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.10 Подголовник LINX Plush регулируемый, размеры – низкий, стандартный;
- 6.11 Регулируемое крепление подголовника;
- 6.12 Активная повязка для лба Zitzi;
- 6.13 Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
- 6.14 Активная повязка для лба Adult, Pro Serie;
- 6.15 Крепежный кронштейн для активной повязки для лба;
- 6.16 Крепление для подголовника;
- 6.17 Крепление для подголовника Anatomic Sits;
- 6.18 Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.19 Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.20 Грудной ремень Н-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.21 Грудной ремень Н-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.22 Грудной ремень Soft Pro, размер 1 (детский), размер 2 (взрослый);
- 6.23 Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.24 Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.25 Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;

- 6.26 Бедренный антиротационный ремень, размеры 1, 2, 3, 4;
- 6.27 Фиксатор голеностопа Exclusive, размер 1, 2, 3;
- 6.28 Фиксатор голеностопа Soft, размер 1, 2, 3;
- 6.29 Фиксатор голеностопа Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.30 Ремень для ступней, размер 1 (S), 2 (L);
- 6.31 Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
- 6.32 Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 6.33 Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L) ;
- 6.34 Подлокотник, размеры 1, 2, 3;
- 6.35 Столик Zitzi Delfi Pro, размер 1, 2, 3;
- 6.36 Столик Zitzi Sharky Pro, размер 1, 2;
- 6.37 Единая подножка Zitzi Delfi Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.38 Единая подножка Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.39 Откидная единая подножка, размеры 1, 2, 3;
- 6.40 Откидная единая подножка Seabass Pro;
- 6.41 Раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.42 Раздельные подножки Seabass Pro, размеры 1, 2, 3;
- 6.43 Регулируемые раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.44 Откидные раздельные подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.45 Подушка для единой подножки, размеры 1, 2, 3;
- 6.46 Подушка для раздельных подножек, размеры 1, 2, 3;
- 6.47 Адаптер для подвижной подножки;
- 6.48 Опора для икр, с одним держателем, размеры 0, 1, 2;
- 6.49 Опора для икр с двумя держателями, 1, 2, 3;
- 6.50 Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
- 6.51 Высокие бортики для подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.52 Высокие бортики для раздельных подножек, размер 1, 2, 3, 4;
- 6.53 Пластина адаптера, размер 1, 2, 3;
- 6.54 Адаптер сиденья универсальный;
- 6.55 Газовая пружина, 365мм/200Н, 380 мм/800Н, 380мм/1200Н;
- 6.56 Ручка для сопровождающего лица 152172;
- 6.57 Ручка для сопровождающего лица Seabass Pro;
- 6.58 Набор кронштейнов для транспортировки;
- 6.59 Ручка откидывания;
- 6.60 Передние колеса цельнолитные Seabass Pro, диаметр 15 см, 18 см;
- 6.61 Передние колеса пневматические, 18 см;
- 6.62 Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
- 6.63 Задние колеса пневматические, диаметр 30 см, 40 см;
- 6.64 Антипрокидыватель, правый/левый;
- 6.65 Защита спиц, диаметр 50 см, 55 см, 60 см;
- 6.66 Брызговик, размер 1, 2, 3;
- 6.67 Ручка тормоза с красным стопорным механизмом;
- 6.68 Трос ручного тормоза, Seabass, Guppy;
- 6.69 Стояночные тормоза;

- 6.70 Крепление для стояночного тормоза для колес, размер 1, 2, 3;
- 6.71 Крепеж стояночного тормоза;
- 6.72 Упор для сопровождающего лица Seabass Pro;
- 6.73 Вертикальная рама

VI. Кресло-коляска Carseat Pro.

Принадлежности:

1. Подголовник Carseat Pro;
2. Подголовник Carseat Pro удлиненный;
3. Активная повязка для лба Zitzi;
4. Активная повязка для лба Junior, Pro Serie;
5. Грудной ремень Х-образный Pro, размер 1, 2, 3, 4;
6. Верхний крепежный кронштейн, удлиненный;
7. Нижний крепежный кронштейн;
8. Грудной ремень Х-образный Exclusive, размер 1, 2, 3, 4;
9. Бедренный ремень Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
10. Бедренный ремень Comfort Pro, размеры 1, 2, 3, 4;
11. Бедренный ремень Exclusive, размеры 1, 2;
12. Поддержка таза, размер 1, 2;
13. Фиксатор кисти Exclusive, размер 1 (S), 2 (M), 3 (L) ;
14. Браслет, размер 1 (S), 2 (L) ;
15. Браслет Soft, размер 1 (S), 2 (L);
16. Столик Carseat Pro;
17. Подножка Carseat Pro;
18. Платформа для ног, размеры 1, 2, 3;
19. Опора для икр Pengy;
20. Подушка для опоры для икр, размер 0, 1, 2, 3, 4;
21. Покрытие опоры бедра, размер 1, 2, 3;
22. Подушка, сиденья, размеры 1, 2, 3;
23. Подушка сиденья Алькантара, размеры 1, 2, 3;
24. Адаптер сиденья Carseat Pro;
25. Ручка для сопровождающего лица 152172;
26. Передние колеса цельнолитные Pengy, диаметр 20 см, 30 см;
27. Передние колеса цельнолитные Gurpy, диаметр 15 см, 18 см, 20 см, 30 см;
28. Задние колеса цельнолитные, диаметр 30 см, 40 см, 50 см, 55 см, 60 см;
29. Педаль тормоза Pengy, пластиковая;
30. Клин;
31. Подушка спинки Carseat Pro, размер 2, 3;
32. Подушка спинки из Алькантары Carseat Pro, размер 2, 3;
33. Поддержка поясницы Zitzi Delfi Pro;
34. Корзинка

We hereby certify the
personal signature of

23/11

Bo Elm



[Перевод с английского и шведского языков на русский язык]

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор Бо Эрикссон

/подпись/

[Штамп:

Настоящим подтверждаем

личную подпись]

[Печать:

Публичный нотариус г. Нёрркёпинг

27.09.2016]

/подпись/

Текст документа на русском языке

На обороте документа:

[Штамп:

Настоящим подтверждаем

личную подпись]

[Печать:

Публичный нотариус г. Нёрркёпинг

27.09.2016]

/подпись/

Перевод выполнен дипломированным переводчиком Фроловой Мариной Михайловной

Город Москва.

Четырнадцатого октября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Фроловой Мариной Михайловной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 12-33725
Взыскано по тарифу: 100 руб.

ВРИО нотариуса



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью. 232 лист(-а, -ов).

ВРИО нотариуса