


4-2 Наименование и назначение составных частей

4-2-1 Внешний вид и наименование составных частей

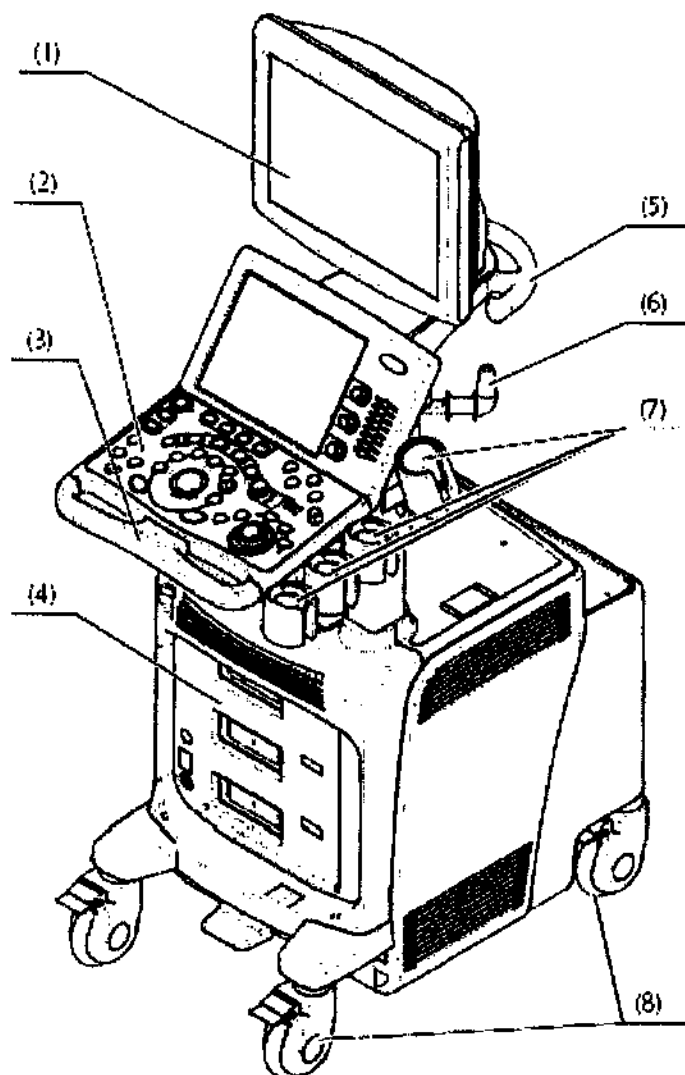

1. Монитор

На нем отображаются УЗ изображения. Может также принимать внешние видеосигналы.

2. Панель управления

На ней расположены различные переключатели для настройки работы аппарата.

→Подробнее см. Раздел 1 инструкции «How to Use».

3. Ручка

Используется для регулировки положения и высоты панели управления. Также используется для переноски прибора.

4. Передняя панель

На передней панели помещены разъемы для подключения датчиков и кабелей блока физиологических сигналов.

5. Держатель кабелей

Используется для размещения на нем кабеля датчика или сетевого шнура при перемещениях прибора на расстояния в пределах 1 метра.

6. Кабельный подвес

На нем закрепляется сетевой шнур

7. Штатив для датчиков

На штативе размещаются датчики

и УЗ проводящий гель.

8. Ролики

Используются

для

перемещения

прибора.