

[별지 제41호서식]

Registered No. 2016 - 11910

NOTARIAL CERTIFICATE



HYUNDAI LAW FIRM & NOTARY OFFICE

65, Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul

TEL: 02)775-7085 FAX: 02)775-7080

서울특별시 중구 명동길 65, 8층
(명동1가, 보람빌딩)



공증인가
법무법인

현 대

(전화) 02)775-7085
(팩스) 02)775-7080



ВЕРИЛИС
10.05.19

—




Подтверждающее письмо

Мы, компания «Иннобиосердж Ко., Лтд», учрежденная в соответствии с законодательством Республики Корея, зарегистрированное по адресу 44-19, Техно 10-ро, Юсонг-гу г.Тэджон Республика Корея, заявляем, что все прилагаемые документы нашей компании являются достоверными и правильными.

** Приложение

1. Инструкция 88 05062016

11июля 2016г.

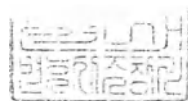

Иннобиосердж Ко., Лтд

Уполномоченный директор Ванг Чже Вон (Wang, je won)

305-81-94533


주식회사 왕제원
이노바이오써지
대전광역시 유성구 테크노10로 44-19번지
제 조 치 과 용 임 플란 트
도매 소매 가 격 우 역 업 치 과 용 임 플란 트



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

1234567890

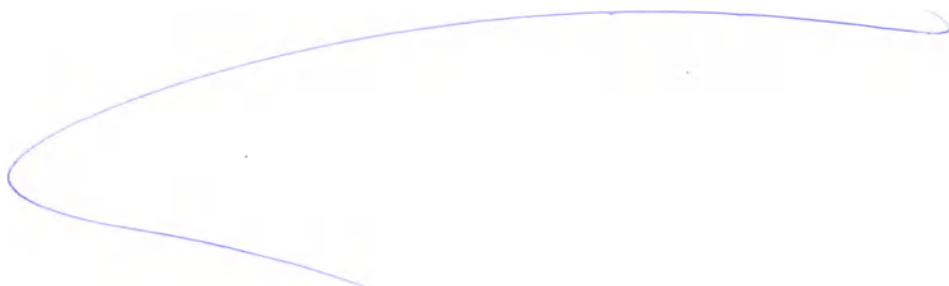

APPROVED BY

Manager

Innobiosurg Co., Ltd

BR Yoo Bo Reum


« » July 8, 2016

INNOBIOSURG CO., LTD.

[Signature]
PRESIDENT WANG JE WON

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Имплантаты дентальные IBS с принадлежностями
(Innobiosurg Co., Ltd («Иннобиосердж Ко., Лтд»), Республика Корея)

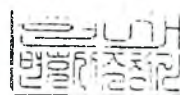

2016

3



Область применения.

Стерильное изделие, предназначенное для хирургической имплантации в альвеолярную и/или базальную кость нижней или верхней челюсти для установки и фиксации дентального протеза (например, моста, отдельного зуба, покрывного протеза). Это однокомпонентное изделие, которое состоит из опорной части (имплантата) в форме резьбового винта, который имплантируется в кость, и держателя (абатмента), который выступает из тканей десны и удерживает протез.

Характеристики изделия.

Имплантаты дентальные IBS применяются в хирургической имплантологии для создания опоры для ортопедических конструкций на верхней и нижней челюстях. Они позволяют изготавливать одиночные искусственные коронки с опорой на имплантат, мостовидные протезы с опорой на имплантаты, а также проводить тотальное протезирование при полном отсутствии зубов, или служить дополнительными ретенционными элементами для съемных протезов. Вид контакта с организмом человека - длительный.

Ортопедические компоненты, как принадлежности к имплантатам, созданы для изготовления ортопедических конструкций с опорой на имплантаты. Лабораторные компоненты используются для снятия оттисков, изготовления моделей в зуботехнической лаборатории и создания ортопедических конструкций с опорой на имплантаты. При установке имплантатов, производства компании Innobiosurg Co., Ltd, рекомендуется использовать только оригинальные инструменты для установки имплантатов IBS.

Имплантаты предназначены только для однократного применения. Принадлежности (ортопедические компоненты) предназначены только для однократного применения.

Область применения медицинского изделия – стоматология.

Техническая спецификация

Рекомендуемый крутящий момент для закручивания абатментов в имплантат 50 ± 2 Н·см.

Имплантаты с абатментами соответствуют ISO 14801, предел усталости в результате приложения динамической нагрузки под углом 30° , не менее 330 Н при 5×10^6 циклов и изгибающем моменте не менее 900 Н·мм.

Максимальная нагрузка при статической нагрузке не менее 700 Н.

Таблица 1.1 Описание и внешний вид изделия

Наименование	Изображение	Особенности:
Имплантаты дентальные IBS Magicore (cutting edge)		1. Маленький диаметр имплантата, но совместимость с абатментами любого размера. 2. Легкая имплантация – путем вкручивания. 3. Высокая жесткость имплантата. 4. Предотвращение опускания имплантата ниже уровня костной манжеты. 5. Может быть применен для крепления съемных протезов. Данный тип совместим со всеми видами ортопедических компонентов (если для компонента не указано иного).
Имплантаты дентальные IBS Magicore		1. Конструкция совместимая со структурой альвеолярного гребня, разработанная для предотвращения появления микротрещин от чрезмерной нагрузки за счет охватывания большей части губчатой кости из нижней части между шагами резьбы по сравнению с верхней частью кортикальной кости. 2. Конструкция, которая гарантирует начальную стабильность имплантата, независимо от качества

		кости пациента: коническая форма, исполнения различного диаметра (позволяют специалисту выбрать диаметр на основе состояния кости пациента), больший диаметр резьбы в верхней части. 3. Конструктивное поддержание кости за счет увеличенной площади поверхности: форма и структура выдерживает вертикальное/горизонтальное давление для предотвращения чрезмерной нагрузки на естественную кость, паз между верхней и нижней частью имплантата для увеличения функциональной поверхности. 4. Конструкция имплантата предотвращает неправильное расположение (опускание) имплантата во время установки: нет необходимости использовать дополнительное давление во время установки, имплантат устанавливается путем вращения, это достигается за счет конструкции (шаг резьбы и форма имплантата). 5. Снижение риска распространения инфекции. Паз между верхней и нижней частью является барьером для патогенных микроорганизмов – естественной преградой между частью, которая находится внутри кости, и частью, которая контактирует с ортопедическими компонентами. Данный тип принадлежностей совместим со всеми видами ортопедических компонентов (если для компонента не указано иного).
Имплантаты дентальные IBS NR Fix		1. Маленький диаметр имплантата, но совместимость с абатментами любого размера. 2. Легкая имплантация – путем вкручивания. 3. Высокая жесткость имплантата. 4. Предотвращение опускания имплантата ниже уровня костной манжеты. 5. Может применяться только в случае, если ширина кости 4 мм или меньше (для нижней челюсти – измеряется по передней шестерке, для верхней – по боковому резцу). 6. Может быть применен для крепления съемных протезов. Данный тип совместим со всеми видами ортопедических компонентов (если для компонента не указано иного).
Имплантаты дентальные IBS Magic FC		1. Маленький диаметр имплантата, но совместимость с абатментами любого размера. 2. Легкая имплантация – путем вкручивания. 3. Высокая жесткость имплантата. 4. Предотвращение опускания имплантата ниже уровня костной манжеты. 5. Может быть применен для крепления съемных протезов.
Имплантаты дентальные IBS Magic FC (Cutting edge)		1. Маленький диаметр имплантата, но совместимость с абатментами любого размера. 2. Легкая имплантация – путем вкручивания. 3. Высокая жесткость имплантата. 4. Предотвращение опускания имплантата ниже уровня костной манжеты. 5. Может быть применен для крепления съемных протезов.

Таблица 1.2 Описание и внешний вид принадлежностей

Наименование	Изображение	Особенности:
Абатмент Magicore		Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок или мостовидных ортопедических конструкций. Соединяется с имплантатом с помощью внешней резьбы и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации
Абатмент UCLA		Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок или мостовидных ортопедических конструкций. Соединяется с имплантатом с помощью внешней резьбы и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации
Абатмент пластинковый UCLA		Временная конструкция, предназначенная для формирования ортопедического компонента на имплантате.
Абатмент мультиюнит		Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок или мостовидных ортопедических конструкций. Соединяется с имплантатом с помощью внешней резьбы и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации. Абатмент устанавливается на время заживления мягких тканей десны до установки постоянного имплантата.
Винт фиксирующий и колпачок для абатмента мультиюнит		Предназначен для крепления абатмента к имплантату.
Колпачок абатмента Magicore		Предназначен для механической защиты опоры абатмента после установки.

Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) в наборе (колпачок и винт)		Предназначен для механической защиты опоры абатмента после установки.
Колпачок выжигаемый (с фиксацией на цемент)		Предназначен для механической защиты опоры абатмента после установки.
Винт		Предназначен для крепления абатмента.
Цилиндр ССМ		Предназначен для изготовления индивидуальных абатментов.
Цилиндр временный		Предназначен для изготовления индивидуальных абатментов.
Цилиндр пластиковый		Предназначен для изготовления индивидуальных абатментов.
Цилиндр соединительный		Предназначен для изготовления индивидуальных абатментов.

Таблица 1.3 Параметры упаковки для стерилизации

Упаковка для стерилизации	Прочность упаковочного материала в продольном/поперечном направлении: 4 Н/см $\pm 0,5$ Н/см; ширина клеевого слоя – 11 ± 1 мм, усилие отрыва/открытия: $2,5 \pm 0,5$ Н, боковые швы располагаются на расстоянии – $1 \pm 0,05$ мм от края пакета,
---------------------------	--

сварные швы должны быть ровными – без прожженных мест и складок;
не допускается наличие на поверхностях упаковочного материала трещин, запрессованных складок, морщин, проколов, надрывов, расслоения материала, загрязнений, а также слипание внутренних поверхностей упаковочного материала

Далее, в таблице 2, представлены основные габаритные размеры, определяющие порядок подготовки и установки имплантатов в костную ткань.

Таблица 2. Технические характеристики изделия

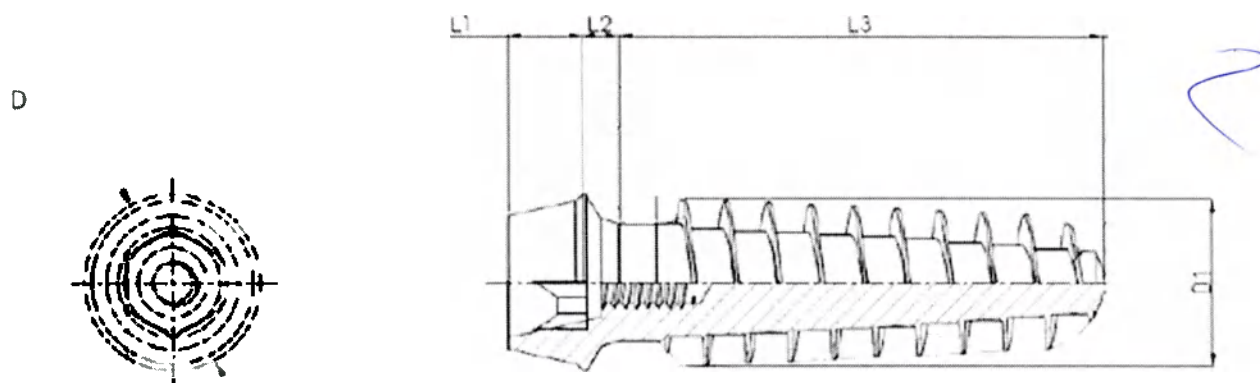


Рис. 1. Имплантаты дентальные IBS Magicore (cutting edge) 451MC4007.

Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)

Допустимое отклонение=±0.05 мм

Наружная резьба: макс. диаметр=4±0.05мм, мин. диаметр=3.32±0.05мм, высота профиля=0.75^{+0.05}_{-0.00}, шаг=1.15±0.05мм, угол резьбы=4°±0.05°, метрическая

Внутренняя резьба: диаметр=1.65±0.05мм, шаг=0.35±0.05 мм, метрическая

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
I.	Имплантаты дентальные IBS Magicore (cutting edge)	451MC4007	2	1	7	4.7	4	0,26
		452MC4007	2	2	7	4.7	4	0,28
		453MC4007	2	3	7	4.7	4	0,36
		454MC4007	2	4	7	4.7	4	0,44
		455MC4007	2	5	7	4.7	4	0,52
		456MC4007	2	6	7	4.7	4	0,59
		457MC4007	2	7	7	4.7	4	0,35
		458MC4007	2	8	7	4.7	4	0,45
		459MC4007	2	9	7	4.7	4	0,55
		4510MC4007	2	10	7	4.7	4	0,65
		451MC4009	2	1	9	4.7	4	0,76
		452MC4009	2	2	9	4.7	4	0,44
		453MC4009	2	3	9	4.7	4	0,57
		454MC4009	2	4	9	4.7	4	0,69
		455MC4009	2	5	9	4.7	4	0,81
		456MC4009	2	6	9	4.7	4	0,93
		457MC4009	2	7	9	4.7	4	1,31
		458MC4009	2	8	9	4.7	4	1,31
		459MC4009	2	9	9	4.7	4	1,40
		4510MC4009	2	10	9	4.7	4	1,41
		451MC4011	2	1	11	4.7	4	1,41
		452MC4011	2	2	11	4.7	4	1,64
		453MC4011	2	3	11	4.7	4	1,65
		454MC4011	2	4	11	4.7	4	1,75

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		455MC4011	2	5	11	4.7	4	1,75
		456MC4011	2	6	11	4.7	4	1,75
		457MC4011	2	7	11	4.7	4	1,77
		458MC4011	2	8	11	4.7	4	1,77
		459MC4011	2	9	11	4.7	4	1,78
		4510MC4011	2	10	11	4.7	4	1,81
		451MC4013	2	1	13	4.7	4	1,84
		452MC4013	2	2	13	4.7	4	0,28
		453MC4013	2	3	13	4.7	4	0,36
		454MC4013	2	4	13	4.7	4	0,44

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		455MC4013	2	5	13	4.7	4	0,52
		456MC4013	2	6	13	4.7	4	0,59
		457MC4013	2	7	13	4.7	4	0,35
		458MC4013	2	8	13	4.7	4	0,45
		459MC4013	2	9	13	4.7	4	0,55
		4510MC4013	2	10	13	4.7	4	0,65
		451MC4507	2	1	7	4.7	4.5	0,76
		452MC4507	2	2	7	4.7	4.5	0,44
		453MC4507	2	3	7	4.7	4.5	0,57
		454MC4507	2	4	7	4.7	4.5	0,69
		455MC4507	2	5	7	4.7	4.5	0,81
		456MC4507	2	6	7	4.7	4.5	0,93
		457MC4507	2	7	7	4.7	4.5	1,31
		458MC4507	2	8	7	4.7	4.5	1,31
		459MC4507	2	9	7	4.7	4.5	1,40
		4510MC4507	2	10	7	4.7	4.5	1,41
		451MC4509	2	8	7	4.7	4.5	1,41
		452MC4509	2	9	7	4.7	4.5	1,64
		453MC4509	2	10	7	4.7	4.5	1,65
		454MC4509	2	1	9	4.7	4.5	1,75
		455MC4509	2	2	9	4.7	4.5	1,75
		456MC4509	2	3	9	4.7	4.5	1,75
		457MC4509	2	4	9	4.7	4.5	1,77
		458MC4509	2	5	9	4.7	4.5	1,77
		459MC4509	2	6	9	4.7	4.5	1,78
		4510MC4509	2	7	9	4.7	4.5	1,81
		451MC4511	2	8	9	4.7	4.5	1,84
		452MC4511	2	9	9	4.7	4.5	1,78
		453MC4511	2	10	9	4.7	4.5	1,81
		454MC4511	2	1	11	4.7	4.5	1,83
		455MC4511	2	2	11	4.7	4.5	1,79
		456MC4511	2	3	11	4.7	4.5	1,83
		457MC4511	2	4	11	4.7	4.5	1,86

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		458MC4511	2	5	11	4.7	4.5	1,77
		459MC4511	2	6	11	4.7	4.5	1,78
		4510MC4511	2	7	11	4.7	4.5	1,81
		451MC4513	2	8	11	4.7	4.5	1,84
		452MC4513	2	9	11	4.7	4.5	1,78
		453MC4513	2	10	11	4.7	4.5	1,81
		454MC4513	2	1	13	4.7	4.5	1,88
		455MC4513	2	2	13	4.7	4.5	1,89
		456MC4513	2	3	13	4.7	4.5	1,90
		457MC4513	2	4	13	4.7	4.5	1,91
		458MC4513	2	5	13	4.7	4.5	1,93
		459MC4513	2	6	13	4.7	4.5	1,95
		4510MC4513	2	7	13	4.7	4.5	1,96
		501MC4007	2	8	13	4.7	4.5	1,98
		502MC4007	2	9	13	4.7	4.5	1,98
		503MC4007	2	10	13	4.7	4.5	1,99
		504MC4007	2	1	7	5.2	4	0,28
		505MC4007	2	2	7	5.2	4	0,30
		506MC4007	2	3	7	5.2	4	0,38
		507MC4007	2	4	7	5.2	4	0,42
		508MC4007	2	5	7	5.2	4	0,50
		509MC4007	2	6	7	5.2	4	0,55
		5010MC4007	2	7	7	5.2	4	0,32
		501MC4009	2	8	7	5.2	4	0,47
		502MC4009	2	9	7	5.2	4	0,55
		503MC4009	2	10	7	5.2	4	0,65
		504MC4009	2	1	9	5.2	4	0,66
		505MC4009	2	2	9	5.2	4	0,67
		506MC4009	2	3	9	5.2	4	0,68

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		507MC4009	2	4	9	5.2	4	0,48
		508MC4009	2	5	9	5.2	4	0,55
		509MC4009	2	6	9	5.2	4	0,65
		5010MC4009	2	7	9	5.2	4	0,66
		501MC4011	2	8	9	5.2	4	0,66
		502MC4011	2	9	9	5.2	4	0,67
		503MC4011	2	10	9	5.2	4	0,68
		504MC4011	2	1	11	5.2	4	1,41
		505MC4011	2	2	11	5.2	4	1,41
		506MC4011	2	3	11	5.2	4	1,64
		507MC4011	2	4	11	5.2	4	1,65
		508MC4011	2	5	11	5.2	4	1,75
		509MC4011	2	6	11	5.2	4	1,75
		5010MC4011	2	7	11	5.2	4	1,75
		501MC4013	2	8	11	5.2	4	1,77
		502MC4013	2	9	11	5.2	4	1,77
		503MC4013	2	10	11	5.2	4	1,78
		504MC4013	2	1	13	5.2	4	1,41
		505MC4013	2	2	13	5.2	4	1,41
		506MC4013	2	3	13	5.2	4	1,64
		507MC4013	2	4	13	5.2	4	1,65
		508MC4013	2	5	13	5.2	4	1,75
		509MC4013	2	6	13	5.2	4	1,75
		5010MC401	2	7	13	5.2	4	1,75
		3501MC4507	2	8	13	5.2	4	1,77
		502MC4507	2	9	13	5.2	4	1,77
		503MC4507	2	10	13	5.2	4	1,77
		504MC4507	2	1	7	5.2	4.5	1,77
		505MC4507	2	2	7	5.2	4.5	1,78

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		506MC4507	2	3	7	5.2	4.5	0,28
		507MC4507	2	4	7	5.2	4.5	0,30
		508MC4507	2	5	7	5.2	4.5	0,38
		509MC4507	2	6	7	5.2	4.5	0,42
		5010MC4507	2	7	7	5.2	4.5	0,50
		501MC4509	2	8	7	5.2	4.5	0,55
		502MC4509	2	9	7	5.2	4.5	0,32
		503MC4509	2	10	7	5.2	4.5	0,47
		504MC4509	2	1	9	5.2	4.5	0,55
		505MC4509	2	2	9	5.2	4.5	0,65
		506MC4509	2	3	9	5.2	4.5	1,75
		507MC4509	2	4	9	5.2	4.5	1,75
		508MC4509	2	5	9	5.2	4.5	1,77
		509MC4509	2	6	9	5.2	4.5	1,77
		5010MC4509	2	7	9	5.2	4.5	1,78
		501MC4511	2	8	9	5.2	4.5	1,41
		502MC4511	2	9	9	5.2	4.5	1,41
		503MC4511	2	10	9	5.2	4.5	1,64
		504MC4511	2	1	11	5.2	4.5	1,65
		505MC4511	2	2	11	5.2	4.5	1,75
		506MC4511	2	3	11	5.2	4.5	1,75
		507MC4511	2	4	11	5.2	4.5	1,64
		508MC4511	2	5	11	5.2	4.5	1,65
		509MC4511	2	6	11	5.2	4.5	1,75
		5010MC4511	2	7	11	5.2	4.5	1,75
		501MC4513	2	8	11	5.2	4.5	1,75
		502MC4513	2	9	11	5.2	4.5	1,77
		503MC4513	2	10	11	5.2	4.5	1,77
		504MC4513	2	1	13	5.2	4.5	1,77

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		505MC4513	2	2	13	5.2	4.5	0,65
		506MC4513	2	3	13	5.2	4.5	1,75
		507MC4513	2	4	13	5.2	4.5	1,75
		508MC4513	2	5	13	5.2	4.5	1,77
		509MC4513	2	6	13	5.2	4.5	1,77
		5010MC4513	2	7	13	5.2	4.5	1,78
		551MC4507	2	8	13	5.2	4.5	1,41
		552MC4507	2	9	13	5.2	4.5	1,75
		553MC4507	2	10	13	5.2	4.5	1,75
		554MC4507	2	1	7	5.7	4.5	1,64
		555MC4507	2	2	7	5.7	4.5	1,65
		556MC4507	2	3	7	5.7	4.5	1,75
		557MC4507	2	4	7	5.7	4.5	1,75
		558MC4507	2	5	7	5.7	4.5	0,65
		559MC4507	2	6	7	5.7	4.5	0,66
		5510MC4507	2	7	7	5.7	4.5	0,66
		551MC4509	2	8	7	5.7	4.5	1,75
		552MC4509	2	9	7	5.7	4.5	1,64
		553MC4509	2	10	7	5.7	4.5	1,65
		554MC4509	2	1	9	5.7	4.5	1,75
		555MC4509	2	2	9	5.7	4.5	1,75
		556MC4509	2	3	9	5.7	4.5	0,65
		557MC4509	2	4	9	5.7	4.5	0,66
		558MC4509	2	5	9	5.7	4.5	0,66
		559MC4509	2	6	9	5.7	4.5	0,67
		5510MC4509	2	7	9	5.7	4.5	1,64
		551MC4511	2	8	9	5.7	4.5	1,65
		552MC4511	2	9	9	5.7	4.5	1,75
		553MC4511	2	10	9	5.7	4.5	1,75

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		554MC4511	2	1	11	5.7	4.5	1,78
		555MC4511	2	2	11	5.7	4.5	1,41
		556MC4511	2	3	11	5.7	4.5	1,41
		557MC4511	2	4	11	5.7	4.5	1,64
		558MC4511	2	5	11	5.7	4.5	1,65
		559MC4511	2	6	11	5.7	4.5	1,75
		5510MC4511	2	7	11	5.7	4.5	1,77
		551MC4513	2	8	11	5.7	4.5	1,77
		552MC4513	2	9	11	5.7	4.5	1,78
		553MC4513	2	10	11	5.7	4.5	1,41
		554MC4513	2	1	13	5.7	4.5	1,75
		555MC4513	2	2	13	5.7	4.5	0,30
		556MC4513	2	3	13	5.7	4.5	0,38
		557MC4513	2	4	13	5.7	4.5	0,42
		558MC4513	2	5	13	5.7	4.5	0,50
		559MC4513	2	6	13	5.7	4.5	1,64
		5510MC4513	2	7	13	5.7	4.5	1,65
		551MC5007	2	8	13	5.7	4.5	1,75
		552MC5007	2	9	13	5.7	4.5	1,77
		553MC5007	2	10	13	5.7	4.5	1,77
		554MC5007	2	1	7	5.7	5	1,78
		555MC5007	2	2	7	5.7	5	1,41
		556MC5007	2	3	7	5.7	5	1,65
		557MC5007	2	4	7	5.7	5	1,75
		558MC5007	2	5	7	5.7	5	1,77
		559MC5007	2	6	7	5.7	5	1,77
		5510MC5007	2	7	7	5.7	5	1,78
		551MC5009	2	8	7	5.7	5	1,78
		552MC5009	2	9	7	5.7	5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		553MC5009	2	10	7	5.7	5	0,30
		554MC5009	2	1	9	5.7	5	0,38
		555MC5009	2	2	9	5.7	5	0,42
		556MC5009	2	3	9	5.7	5	0,50
		557MC5009	2	4	9	5.7	5	0,55
		558MC5009	2	5	9	5.7	5	0,32
		559MC5009	2	6	9	5.7	5	1,65
		5510MC5009	2	7	9	5.7	5	1,75
		551MC5011	2	8	9	5.7	5	1,77
		552MC5011	2	9	9	5.7	5	1,77
		553MC5011	2	10	9	5.7	5	1,78
		554MC5011	2	1	11	5.7	5	1,78
		555MC5011	2	2	11	5.7	5	1,41
		556MC5011	2	3	11	5.7	5	0,42
		557MC5011	2	4	11	5.7	5	0,50
		558MC5011	2	5	11	5.7	5	0,55
		559MC5011	2	6	11	5.7	5	0,32
		5510MC5011	2	7	11	5.7	5	1,65
		551MC5013	2	8	11	5.7	5	1,75
		552MC5013	2	9	11	5.7	5	1,77
		553MC5013	2	10	11	5.7	5	1,77
		554MC5013	2	1	13	5.7	5	1,78
		555MC5013	2	2	13	5.7	5	1,78
		556MC5013	2	3	13	5.7	5	1,41
		557MC5013	2	4	13	5.7	5	0,42
		558MC5013	2	5	13	5.7	5	0,50
		559MC5013	2	6	13	5.7	5	1,78
		5510MC5013	2	7	13	5.7	5	1,41
		551MC507	2	8	13	5.7	5	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		552MC5507	2	9	13	5.7	5	0,42
		553MC5507	2	10	13	5.7	5	0,50
		554MC5507	2	1	7	5.7	5.5	0,55
		555MC5507	2	2	7	5.7	5.5	0,32
		556MC5507	2	3	7	5.7	5.5	1,65
		557MC5507	2	4	7	5.7	5.5	1,75
		558MC5507	2	5	7	5.7	5.5	1,77
		559MC5507	2	6	7	5.7	5.5	1,77
		5510MC5507	2	7	7	5.7	5.5	1,78
		551MC5509	2	8	7	5.7	5.5	1,78
		552MC5509	2	9	7	5.7	5.5	1,41
		553MC5509	2	10	7	5.7	5.5	0,42
		554MC5509	2	1	9	5.7	5.5	0,50
		555MC5509	2	2	9	5.7	5.5	0,55
		556MC5509	2	3	9	5.7	5.5	0,42
		557MC5509	2	4	9	5.7	5.5	0,50
		558MC5509	2	5	9	5.7	5.5	0,55
		559MC5509	2	6	9	5.7	5.5	0,32
		5510MC5509	2	7	9	5.7	5.5	1,65
		551MC5511	2	8	9	5.7	5.5	1,75
		552MC5511	2	9	9	5.7	5.5	1,77
		553MC5511	2	10	9	5.7	5.5	1,77
		554MC5511	2	1	11	5.7	5.5	1,78
		555MC5511	2	2	11	5.7	5.5	1,78
		556MC5511	2	3	11	5.7	5.5	1,41
		557MC5511	2	4	11	5.7	5.5	0,42
		558MC5511	2	5	11	5.7	5.5	0,50
		559MC5511	2	6	11	5.7	5.5	0,55
		5510MC5511	2	7	11	5.7	5.5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		551MC5513	2	8	11	5.7	5.5	1,78
		552MC5513	2	9	11	5.7	5.5	1,78
		553MC5513	2	10	11	5.7	5.5	1,41
		554MC5513	2	1	13	5.7	5.5	0,42
		555MC5513	2	2	13	5.7	5.5	0,50
		556MC5513	2	3	13	5.7	5.5	0,55
		557MC5513	2	4	13	5.7	5.5	1,41
		558MC5513	2	5	13	5.7	5.5	1,78
		559MC5513	2	6	13	5.7	5.5	1,41
		5510MC5513	2	7	13	5.7	5.5	0,42
		551MC6007	2	8	13	5.7	5.5	0,50
		552MC6007	2	9	13	5.7	5.5	0,55
		553MC6007	2	10	13	5.7	5.5	1,78
		554MC6007	2	1	7	5.7	6	1,78
		555MC6007	2	2	7	5.7	6	1,41
		556MC6007	2	3	7	5.7	6	0,42
		557MC6007	2	4	7	5.7	6	0,50
		558MC6007	2	5	7	5.7	6	0,55
		559MC6007	2	6	7	5.7	6	1,41
		5510MC6007	2	7	7	5.7	6	1,78
		551MC6009	2	8	7	5.7	6	1,41
		552MC6009	2	9	7	5.7	6	0,42
		553MC6009	2	10	7	5.7	6	0,50
		554MC6009	2	1	9	5.7	6	0,55
		555MC6009	2	2	9	5.7	6	0,32
		556MC6009	2	3	9	5.7	6	1,65
		557MC6009	2	4	9	5.7	6	1,75
		558MC6009	2	5	9	5.7	6	1,77
		559MC6009	2	6	9	5.7	6	1,77

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		5510MC6009	2	7	9	5.7	6	0,50
		551MC6011	2	8	9	5.7	6	0,55
		552MC6011	2	9	9	5.7	6	1,41
		553MC6011	2	10	9	5.7	6	1,78
		554MC6011	2	1	11	5.7	6	1,41
		555MC6011	2	2	11	5.7	6	0,42
		556MC6011	2	3	11	5.7	6	0,50
		557MC6011	2	4	11	5.7	6	0,55
		558MC6011	2	5	11	5.7	6	0,32
		559MC6011	2	6	11	5.7	6	1,65
		5510MC6011	2	7	11	5.7	6	1,41
		551MC6013	2	8	11	5.7	6	0,42
		552MC6013	2	9	11	5.7	6	0,50
		553MC6013	2	10	11	5.7	6	0,55
		554MC6013	2	1	13	5.7	6	1,78
		555MC6013	2	2	13	5.7	6	1,41
		556MC6013	2	3	13	5.7	6	0,42
		557MC6013	2	4	13	5.7	6	0,50
		558MC6013	2	5	13	5.7	6	0,55
		559MC6013	2	6	13	5.7	6	0,32
		5510MC6013	2	7	13	5.7	6	1,65
		551MC6507	2	8	13	5.7	6	1,41
		552MC6507	2	9	13	5.7	6	0,42
		553MC6507	2	10	13	5.7	6	0,50
		554MC6507	2	1	7	5.7	6.5	0,55
		555MC6507	2	2	7	5.7	6.5	1,78
		556MC6507	2	3	7	5.7	6.5	1,78
		557MC6507	2	4	7	5.7	6.5	1,41
		558MC6507	2	5	7	5.7	6.5	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		559MC6507	2	6	7	5.7	6.5	1,78
		5510MC6507	2	7	7	5.7	6.5	1,41
		551MC6509	2	8	7	5.7	6.5	0,42
		552MC6509	2	9	7	5.7	6.5	0,50
		553MC6509	2	10	7	5.7	6.5	0,55
		554MC6509	2	1	9	5.7	6.5	1,78
		555MC6509	2	2	9	5.7	6.5	1,41
		556MC6509	2	3	9	5.7	6.5	0,42
		557MC6509	2	4	9	5.7	6.5	0,50
		558MC6509	2	5	9	5.7	6.5	0,55
		559MC6509	2	6	9	5.7	6.5	0,32
		5510MC6509	2	7	9	5.7	6.5	1,65
		551MC6511	2	8	9	5.7	6.5	1,41
		552MC6511	2	9	9	5.7	6.5	0,42
		553MC6511	2	10	9	5.7	6.5	1,78
		554MC6511	2	1	11	5.7	6.5	1,41
		555MC6511	2	2	11	5.7	6.5	0,42
		556MC6511	2	3	11	5.7	6.5	0,50
		557MC6511	2	4	11	5.7	6.5	0,55
		558MC6511	2	5	11	5.7	6.5	0,32
		559MC6511	2	6	11	5.7	6.5	1,65
		5510MC6511	2	7	11	5.7	6.5	1,41
		551MC6513	2	8	11	5.7	6.5	0,42
		552MC6513	2	9	11	5.7	6.5	0,50
		553MC6513	2	10	11	5.7	6.5	0,55
		554MC6513	2	1	13	5.7	6.5	1,78
		555MC6513	2	2	13	5.7	6.5	1,78
		556MC6513	2	3	13	5.7	6.5	1,41
		557MC6513	2	4	13	5.7	6.5	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		558MC6513	2	5	13	5.7	6.5	1,78
		559MC6513	2	6	13	5.7	6.5	1,41
		5510MC6513	2	7	13	5.7	6.5	0,42
		601MC5007	2	8	13	5.7	6.5	0,50
		602MC5007	2	9	13	5.7	6.5	0,55
		602MC5007	2	10	13	5.7	6.5	1,78
		603MC5007	2	1	7	6	5	1,41
		604MC5007	2	2	7	6	5	0,42
		605MC5007	2	3	7	6	5	0,50
		606MC5007	2	4	7	6	5	0,55
		607MC5007	2	5	7	6	5	0,32
		608MC5007	2	6	7	6	5	1,65
		609MC5007	2	7	7	6	5	1,41
		6010MC5007	2	8	7	6	5	0,42
		601MC5009	2	9	7	6	5	1,78
		602MC5009	2	10	7	6	5	1,41
		603MC5009	2	1	9	6	5	0,42
		604MC5009	2	2	9	6	5	0,50
		605MC5009	2	3	9	6	5	0,55
		606MC5009	2	4	9	6	5	0,32
		607MC5009	2	5	9	6	5	1,65
		608MC5009	2	6	9	6	5	1,41
		609MC5009	2	7	9	6	5	0,42
		6010MC5009	2	8	9	6	5	0,50
		601MC5011	2	9	9	6	5	0,55
		602MC5011	2	10	9	6	5	1,78
		603MC5011	2	1	11	6	5	1,78
		604MC5011	2	2	11	6	5	1,41
		605MC5011	2	3	11	6	5	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		606MC5011	2	4	11	6	5	0,42
		607MC5011	2	5	11	6	5	0,50
		608MC5011	2	6	11	6	5	0,55
		609MC5011	2	7	11	6	5	0,32
		6010MC5011	2	8	11	6	5	1,65
		601MC5013	2	9	11	6	5	1,75
		602MC5013	2	10	11	6	5	1,77
		603MC5013	2	1	13	6	5	1,77
		604MC5013	2	2	13	6	5	1,78
		605MC5013	2	3	13	6	5	1,78
		606MC5013	2	4	13	6	5	1,41
		607MC5013	2	5	13	6	5	0,42
		608MC5013	2	6	13	6	5	0,50
		609MC5013	2	7	13	6	5	0,55
		6010MC5013	2	8	13	6	5	0,42
		601MC5507	2	9	13	6	5	0,50
		602MC5507	2	10	13	6	5	0,55
		603MC5507	2	1	7	6	5.5	0,32
		604MC5507	2	2	7	6	5.5	1,65
		605MC5507	2	3	7	6	5.5	1,75
		606MC5507	2	4	7	6	5.5	1,77
		607MC5507	2	5	7	6	5.5	1,77
		608MC5507	2	6	7	6	5.5	1,78
		609MC5507	2	7	7	6	5.5	1,78
		6010MC5507	2	8	7	6	5.5	1,41
		601MC5509	2	9	7	6	5.5	0,42
		602MC5509	2	10	7	6	5.5	0,50
		603MC5509	2	1	9	6	5.5	0,55
		604MC5509	2	2	9	6	5.5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		605MC5509	2	3	9	6	5.5	1,78
		606MC5509	2	4	9	6	5.5	1,41
		607MC5509	2	5	9	6	5.5	0,42
		608MC5509	2	6	9	6	5.5	0,50
		609MC5509	2	7	9	6	5.5	0,55
		6010MC5509	2	8	9	6	5.5	0,42
		601MC5511	2	9	9	6	5.5	0,50
		602MC5511	2	10	9	6	5.5	0,55
		603MC5511	2	1	11	6	5.5	0,32
		604MC5511	2	2	11	6	5.5	1,65
		605MC5511	2	3	11	6	5.5	1,75
		606MC5511	2	4	11	6	5.5	0,42
		607MC5511	2	5	11	6	5.5	0,50
		608MC5511	2	6	11	6	5.5	0,55
		609MC5511	2	7	11	6	5.5	0,42
		6010MC5511	2	8	11	6	5.5	0,50
		601MC5513	2	9	11	6	5.5	0,55
		602MC5513	2	10	11	6	5.5	0,32
		603MC5513	2	1	13	6	5.5	1,65
		604MC5513	2	2	13	6	5.5	1,75
		605MC5513	2	3	13	6	5.5	0,42
		606MC5513	2	4	13	6	5.5	0,50
		607MC5513	2	5	13	6	5.5	0,55
		608MC5513	2	6	13	6	5.5	0,32
		609MC5513	2	7	13	6	5.5	1,65
		6010MC5513	2	8	13	6	5.5	1,75
		601MC6507	2	9	13	6	5.5	0,50
		602MC6507	2	10	13	6	5.5	0,55
		603MC6507	2	1	7	6	6.5	0,32

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		604MC6507	2	2	7	6	6.5	0,55
		605MC6507	2	3	7	6	6.5	0,32
		606MC6507	2	4	7	6	6.5	1,65
		607MC6507	2	5	7	6	6.5	1,75
		608MC6507	2	6	7	6	6.5	0,42
		609MC6507	2	7	7	6	6.5	0,50
		6010MC6507	2	8	7	6	6.5	0,55
		601MC6509	2	9	7	6	6.5	0,32
		602MC6509	2	10	7	6	6.5	1,65
		603MC6509	2	1	9	6	6.5	1,75
		604MC6509	2	2	9	6	6.5	0,42
		605MC6509	2	3	9	6	6.5	0,50
		606MC6509	2	4	9	6	6.5	0,55
		607MC6509	2	5	9	6	6.5	1,78
		608MC6509	2	6	9	6	6.5	1,41
		609MC6509	2	7	9	6	6.5	0,42
		6010MC6509	2	8	9	6	6.5	0,50
		601MC6511	2	9	9	6	6.5	0,55
		602MC6511	2	10	9	6	6.5	0,32
		603MC6511	2	1	11	6	6.5	1,65
		604MC6511	2	2	11	6	6.5	0,32
		605MC6511	2	3	11	6	6.5	1,65
		606MC6511	2	4	11	6	6.5	1,75
		607MC6511	2	5	11	6	6.5	0,42
		608MC6511	2	6	11	6	6.5	0,50
		609MC6511	2	7	11	6	6.5	0,55
		6010MC6511	2	8	11	6	6.5	1,78
		601MC6513	2	9	11	6	6.5	1,78
		602MC6513	2	10	11	6	6.5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		603MC6513	2	1	13	6	6.5	1,78
		604MC6513	2	2	13	6	6.5	1,41
		605MC6513	2	3	13	6	6.5	0,42
		606MC6513	2	4	13	6	6.5	0,50
		607MC6513	2	5	13	6	6.5	0,55
		608MC6513	2	6	13	6	6.5	0,42
		609MC6513	2	7	13	6	6.5	0,50
		6010MC6513	2	8	13	6	6.5	0,55
		651MC5507	2	9	13	6	6.5	0,32
		652MC5507	2	10	13	6	6.5	1,65
		653MC5507	2	1	7	6.5	5.5	1,75
		654MC5507	2	2	7	6.5	5.5	0,42
		655MC5507	2	3	7	6.5	5.5	0,50
		656MC5507	2	4	7	6.5	5.5	0,55
		657MC5507	2	5	7	6.5	5.5	0,42
		658MC5507	2	6	7	6.5	5.5	0,50
		659MC5507	2	7	7	6.5	5.5	0,55
		6510MC5507	2	8	7	6.5	5.5	0,32
		651MC5509	2	9	7	6.5	5.5	1,65
		652MC5509	2	10	7	6.5	5.5	1,75
		653MC5509	2	1	9	6.5	5.5	0,42
		654MC5509	2	2	9	6.5	5.5	0,50
		655MC5509	2	3	9	6.5	5.5	0,55
		656MC5509	2	4	9	6.5	5.5	0,32
		657MC5509	2	5	9	6.5	5.5	1,65
		658MC5509	2	6	9	6.5	5.5	1,75
		659MC5509	2	7	9	6.5	5.5	0,50
		6510MC5509	2	8	9	6.5	5.5	0,55
		651MC5511	2	9	9	6.5	5.5	0,32

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		652MC5511	2	10	9	6.5	5.5	0,26
		653MC5511	2	1	11	6.5	5.5	0,28
		654MC5511	2	2	11	6.5	5.5	0,36
		655MC5511	2	3	11	6.5	5.5	0,44
		656MC5511	2	4	11	6.5	5.5	0,52
		657MC5511	2	5	11	6.5	5.5	0,59
		658MC5511	2	6	11	6.5	5.5	0,35
		659MC5511	2	7	11	6.5	5.5	0,45
		6510MC5511	2	8	11	6.5	5.5	0,55
		651MC5513	2	9	11	6.5	5.5	0,65
		652MC5513	2	10	11	6.5	5.5	0,76
		653MC5513	2	1	13	6.5	5.5	0,44
		654MC5513	2	2	13	6.5	5.5	0,57
		655MC5513	2	3	13	6.5	5.5	0,69
		656MC5513	2	4	13	6.5	5.5	0,81
		657MC5513	2	5	13	6.5	5.5	0,93
		658MC5513	2	6	13	6.5	5.5	1,31
		659MC5513	2	7	13	6.5	5.5	1,31
		6510MC5513	2	8	13	6.5	5.5	1,40
		651MC6007	2	9	13	6.5	5.5	1,41
		652MC6007	2	10	13	6.5	5.5	0,44
		653MC6007	2	1	7	6.5	6	0,57
		654MC6007	2	2	7	6.5	6	0,69
		655MC6007	2	3	7	6.5	6	0,81
		656MC6007	2	4	7	6.5	6	0,93
		657MC6007	2	5	7	6.5	6	1,31
		658MC6007	2	6	7	6.5	6	0,81
		659MC6007	2	7	7	6.5	6	0,93
		6510MC6007	2	8	7	6.5	6	1,31

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		651MC6009	2	9	7	6.5	6	1,78
		652MC6009	2	10	7	6.5	6	1,41
		653MC6009	2	1	9	6.5	6	0,42
		654MC6009	2	2	9	6.5	6	0,50
		655MC6009	2	3	9	6.5	6	0,55
		656MC6009	2	4	9	6.5	6	0,42
		657MC6009	2	5	9	6.5	6	0,50
		658MC6009	2	6	9	6.5	6	0,55
		659MC6009	2	7	9	6.5	6	0,32
		6510MC6009	2	8	9	6.5	6	1,65
		651MC6011	2	9	9	6.5	6	1,75
		652MC6011	2	10	9	6.5	6	0,42
		653MC6011	2	1	11	6.5	6	1,75
		654MC6011	2	2	11	6.5	6	0,42
		655MC6011	2	3	11	6.5	6	0,50
		656MC6011	2	4	11	6.5	6	0,55
		657MC6011	2	7	11	6.5	6	0,55
		658MC6011	2	8	11	6.5	6	0,32
		659MC6011	2	9	11	6.5	6	1,65
		6510MC6011	2	10	11	6.5	6	1,75
		651MC6013	2	1	13	6.5	6	0,42
		652MC6013	2	2	13	6.5	6	0,50
		653MC6013	2	3	13	6.5	6	0,55
		654MC6013	2	4	13	6.5	6	0,32
		655MC6013	2	5	13	6.5	6	1,65
		656MC6013	2	6	13	6.5	6	1,75
		657MC6013	2	7	13	6.5	6	0,50
		658MC6013	2	8	13	6.5	6	0,55
		659MC6013	2	9	13	6.5	6	0,32

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		6510MC6013	2	10	13	6.5	6	1,75
		651MC6507	2	1	7	6.5	6.5	0,42
		652MC6507	2	2	7	6.5	6.5	0,50
		653MC6507	2	3	7	6.5	6.5	0,55
		654MC6507	2	4	7	6.5	6.5	0,32
		655MC6507	2	5	7	6.5	6.5	1,65
		656MC6507	2	6	7	6.5	6.5	1,75
		657MC6507	2	7	7	6.5	6.5	1,75
		658MC6507	2	8	7	6.5	6.5	0,42
		659MC6507	2	9	7	6.5	6.5	0,50
		6510MC6507	2	10	7	6.5	6.5	0,55
		651MC6509	2	1	9	6.5	6.5	0,42
		652MC6509	2	2	9	6.5	6.5	0,50
		653MC6509	2	3	9	6.5	6.5	0,55
		654MC6509	2	4	9	6.5	6.5	0,32
		655MC6509	2	5	9	6.5	6.5	1,65
		656MC6509	2	6	9	6.5	6.5	1,75
		657MC6509	2	7	9	6.5	6.5	1,75
		658MC6509	2	8	9	6.5	6.5	0,42
		659MC6509	2	9	9	6.5	6.5	0,50
		6510MC6509	2	10	9	6.5	6.5	0,55
		651MC6511	2	1	11	6.5	6.5	0,55
		652MC6511	2	2	11	6.5	6.5	0,32
		653MC6511	2	3	11	6.5	6.5	1,65
		654MC6511	2	4	11	6.5	6.5	1,75
		655MC6511	2	5	11	6.5	6.5	0,42
		656MC6511	2	6	11	6.5	6.5	1,75
		657MC6511	2	7	11	6.5	6.5	0,42
		658MC6511	2	8	11	6.5	6.5	1,75

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		659MC6511	2	9	11	6.5	6.5	1,41
		6510MC6511	2	10	11	6.5	6.5	0,42
		651MC6513	2	1	13	6.5	6.5	0,50
		652MC6513	2	2	13	6.5	6.5	0,55
		653MC6513	2	3	13	6.5	6.5	0,42
		654MC6513	2	4	13	6.5	6.5	0,50
		655MC6513	2	5	13	6.5	6.5	0,32
		656MC6513	2	6	13	6.5	6.5	1,65
		657MC6513	2	7	13	6.5	6.5	1,75
		658MC6513	2	8	13	6.5	6.5	1,75
		659MC6513	2	9	13	6.5	6.5	1,75
		6510MC6513	2	10	13	6.5	6.5	0,42

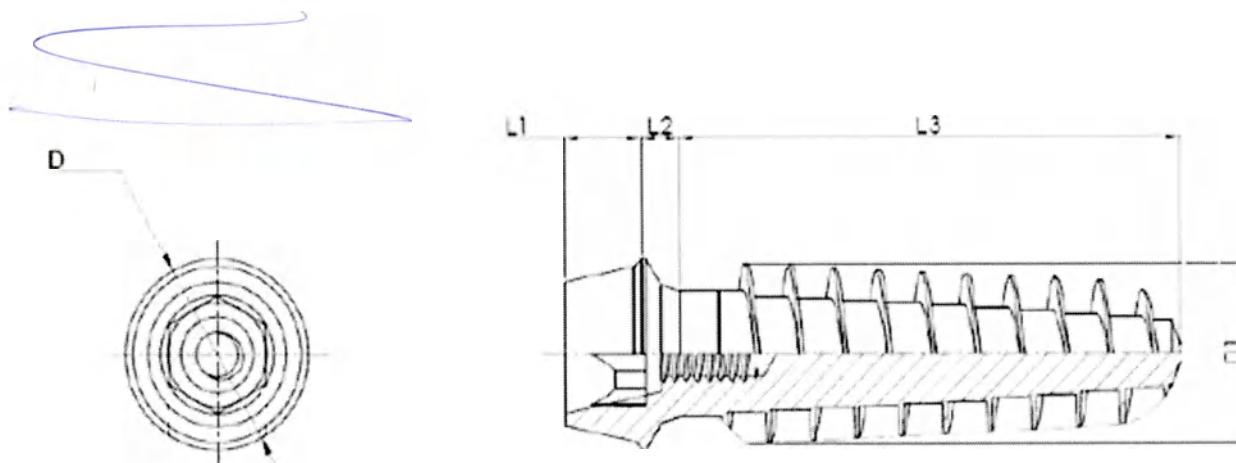


Рис. 2. Имплантаты дентальные IBS Magiscore 451M4007

Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)

Допустимое отклонение=±0.05 мм

Наружная резьба: макс. диаметр=4±0.05 мм, мин. диаметр=3.32±0.05 мм, высота профиля=0,75^{+0,05}_{-0,00}, шаг=1.15±0.05 мм, угол резьбы=4°±0.05°, метрическая

Внутренняя резьба: диаметр=1.65±0.05 мм, шаг=0.35±0.05 мм, метрическая

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
2.	Имплантаты дентальные IBS Magiscore	451M4007	2	1	7	4.7	4	1,75
		452M4007	2	2	7	4.7	4	0,42
		453M4007	2	3	7	4.7	4	0,50
		454M4007	2	4	7	4.7	4	0,55
		455M4007	2	5	7	4.7	4	0,32

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		456M4007	2	6	7	4.7	4	1,65
		457M4007	2	7	7	4.7	4	1,75
		458M4007	2	8	7	4.7	4	1,75
		459M4007	2	9	7	4.7	4	0,42
		4510M4007	2	10	7	4.7	4	0,50
		451M4009	2	1	9	4.7	4	0,55
		452M4009	2	2	9	4.7	4	0,42
		453M4009	2	3	9	4.7	4	0,50
		454M4009	2	4	9	4.7	4	0,55
		455M4009	2	5	9	4.7	4	0,32
		456M4009	2	6	9	4.7	4	1,65
		457M4009	2	7	9	4.7	4	1,75
		458M4009	2	8	9	4.7	4	1,75
		459M4009	2	9	9	4.7	4	0,42
		4510M4009	2	10	9	4.7	4	0,50
		451M4011	2	1	11	4.7	4	0,55
		452M4011	2	2	11	4.7	4	0,55
		453M4011	2	3	11	4.7	4	0,32
		454M4011	2	4	11	4.7	4	1,65
		455M4011	2	5	11	4.7	4	1,75
		456M4011	2	6	11	4.7	4	0,42
		457M4011	2	7	11	4.7	4	1,75
		458M4011	2	8	11	4.7	4	0,42
		459M4011	2	9	11	4.7	4	1,75

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, (±0,05 г)
		4510M4011	2	10	11	4.7	4	1,78
		451M4013	2	1	13	4.7	4	1,41
		452M4013	2	2	13	4.7	4	0,42
		453M4013	2	3	13	4.7	4	0,50
		454M4013	2	4	13	4.7	4	0,55
		455M4013	2	5	13	4.7	4	0,42
		456M4013	2	6	13	4.7	4	0,50
		457M4013	2	7	13	4.7	4	0,55
		458M4013	2	8	13	4.7	4	0,32
		459M4013	2	9	13	4.7	4	1,65
		4510M4013	2	10	13	4.7	4	1,75
		451M4507	2	1	7	4.7	4.5	0,42
		452M4507	2	2	7	4.7	4.5	1,75
		453M4507	2	3	7	4.7	4.5	0,42
		454M4507	2	4	7	4.7	4.5	0,50
		455M4507	2	5	7	4.7	4.5	0,55
		456M4507	2	6	7	4.7	4.5	0,55
		457M4507	2	7	7	4.7	4.5	0,32
		458M4507	2	8	7	4.7	4.5	1,65
		459M4507	2	9	7	4.7	4.5	1,75
		4510M4507	2	10	7	4.7	4.5	0,42
		451M4509	2	1	9	4.7	4.5	0,50
		452M4509	2	2	9	4.7	4.5	0,55
		453M4509	2	3	9	4.7	4.5	0,32
		454M4509	2	4	9	4.7	4.5	1,65
		455M4509	2	5	9	4.7	4.5	1,75
		456M4509	2	6	9	4.7	4.5	0,50
		457M4509	2	7	9	4.7	4.5	0,55
		458M4509	2	8	9	4.7	4.5	0,32

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		459M4509	2	9	9	4.7	4.5	0,26
		4510M4509	2	10	9	4.7	4.5	0,28
		451M4511	2	1	11	4.7	4.5	0,36
		452M4511	2	2	11	4.7	4.5	0,44
		453M4511	2	3	11	4.7	4.5	0,52
		454M4511	2	4	11	4.7	4.5	0,59
		455M4511	2	5	11	4.7	4.5	0,35
		456M4511	2	6	11	4.7	4.5	0,45
		457M4511	2	7	11	4.7	4.5	0,55
		458M4511	2	8	11	4.7	4.5	0,65
		459M4511	2	9	11	4.7	4.5	0,76
		4510M4511	2	10	11	4.7	4.5	0,44
		451M4513	2	1	13	4.7	4.5	0,57
		452M4513	2	2	13	4.7	4.5	0,69
		453M4513	2	3	13	4.7	4.5	0,81
		454M4513	2	4	13	4.7	4.5	0,93
		455M4513	2	5	13	4.7	4.5	1,31
		456M4513	2	6	13	4.7	4.5	1,31
		457M4513	2	7	13	4.7	4.5	1,40
		458M4513	2	8	13	4.7	4.5	1,41
		459M4513	2	9	13	4.7	4.5	0,44
		4510M4513	2	10	13	4.7	4.5	0,57
		501M4007	2	1	7	5.2	4	0,69
		502M4007	2	2	7	5.2	4	0,81
		503M4007	2	3	7	5.2	4	0,93
		504M4007	2	4	7	5.2	4	1,31
		505M4007	2	5	7	5.2	4	0,81
		506M4007	2	6	7	5.2	4	0,93
		507M4007	2	7	7	5.2	4	1,31

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, (±0,05 г)
		508M4007	2	8	7	5.2	4	1,78
		509M4007	2	9	7	5.2	4	1,41
		5010M4007	2	10	7	5.2	4	0,42
		501M4009	2	1	9	5.2	4	0,50
		502M4009	2	2	9	5.2	4	0,55
		503M4009	2	3	9	5.2	4	0,42
		504M4009	2	4	9	5.2	4	0,50
		505M4009	2	5	9	5.2	4	0,55
		506M4009	2	6	9	5.2	4	0,32
		507M4009	2	7	9	5.2	4	1,65
		508M4009	2	8	9	5.2	4	1,75
		509M4009	2	9	9	5.2	4	0,42
		5010M4009	2	10	9	5.2	4	0,50
		501M4011	2	1	11	5.2	4	0,55
		502M4011	2	2	11	5.2	4	0,42
		503M4011	2	3	11	5.2	4	0,50
		504M4011	2	4	11	5.2	4	0,55
		505M4011	2	5	11	5.2	4	0,32
		506M4011	2	6	11	5.2	4	1,65
		507M4011	2	7	11	5.2	4	1,75
		508M4011	2	8	11	5.2	4	0,42
		509M4011	2	9	11	5.2	4	0,50
		5010M4011	2	10	11	5.2	4	0,55
		501M4013	2	1	13	5.2	4	0,32
		502M4013	2	2	13	5.2	4	1,65
		503M4013	2	3	13	5.2	4	1,75
		504M4013	2	4	13	5.2	4	0,50
		505M4013	2	5	13	5.2	4	0,55
		506M4013	2	6	13	5.2	4	0,32

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		507M4013	2	7	13	5.2	4	0,55
		508M4013	2	8	13	5.2	4	0,32
		509M4013	2	9	13	5.2	4	1,65
		5010M4013	2	10	13	5.2	4	1,75
		501M4507	2	1	7	5.2	4.5	0,42
		502M4507	2	2	7	5.2	4.5	0,50
		503M4507	2	3	7	5.2	4.5	0,55
		504M4507	2	4	7	5.2	4.5	0,32
		505M4507	2	5	7	5.2	4.5	1,65
		506M4507	2	6	7	5.2	4.5	1,75
		507M4507	2	7	7	5.2	4.5	0,42
		508M4507	2	8	7	5.2	4.5	0,50
		509M4507	2	9	7	5.2	4.5	0,55
		5010M4507	2	10	7	5.2	4.5	1,78
		501M4509	2	1	9	5.2	4.5	1,41
		502M4509	2	2	9	5.2	4.5	0,42
		503M4509	2	3	9	5.2	4.5	0,50
		504M4509	2	4	9	5.2	4.5	0,55
		505M4509	2	5	9	5.2	4.5	0,32
		506M4509	2	6	9	5.2	4.5	1,65
		507M4509	2	7	9	5.2	4.5	0,32
		508M4509	2	8	9	5.2	4.5	1,65
		509M4509	2	9	9	5.2	4.5	1,75
		5010M4509	2	10	9	5.2	4.5	0,42
		501M4511	2	1	11	5.2	4.5	0,50
		502M4511	2	2	11	5.2	4.5	0,55
		503M4511	2	3	11	5.2	4.5	1,78
		504M4511	2	4	11	5.2	4.5	1,78
		505M4511	2	5	11	5.2	4.5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, (±0,05 г)
		506M4511	2	6	11	5.2	4.5	1,78
		507M4511	2	7	11	5.2	4.5	1,41
		508M4511	2	8	11	5.2	4.5	0,42
		509M4511	2	9	11	5.2	4.5	0,50
		5010M4511	2	10	11	5.2	4.5	0,55
		501M4513	2	1	13	5.2	4.5	0,42
		502M4513	2	2	13	5.2	4.5	0,50
		503M4513	2	3	13	5.2	4.5	0,55
		504M4513	2	4	13	5.2	4.5	0,32
		505M4513	2	5	13	5.2	4.5	1,65
		506M4513	2	6	13	5.2	4.5	1,75
		507M4513	2	7	13	5.2	4.5	0,42
		508M4513	2	8	13	5.2	4.5	0,50
		509M4513	2	9	13	5.2	4.5	0,55
		5010M4513	2	10	13	5.2	4.5	0,42
		551M4507	2	1	7	5.7	4.5	0,50
		552M4507	2	2	7	5.7	4.5	0,55
		553M4507	2	3	7	5.7	4.5	0,32
		554M4507	2	4	7	5.7	4.5	1,65
		555M4507	2	5	7	5.7	4.5	1,75
		556M4507	2	6	7	5.7	4.5	0,42
		557M4507	2	7	7	5.7	4.5	0,50
		558M4507	2	8	7	5.7	4.5	0,55
		559M4507	2	9	7	5.7	4.5	0,32
		5510M4507	2	10	7	5.7	4.5	1,65
		551M4509	2	1	9	5.7	4.5	1,75
		552M4509	2	2	9	5.7	4.5	0,50
		553M4509	2	3	9	5.7	4.5	0,55
		554M4509	2	4	9	5.7	4.5	0,32

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		555M4509	2	5	9	5.7	4.5	0,42
		556M4509	2	6	9	5.7	4.5	0,50
		557M4509	2	7	9	5.7	4.5	0,55
		558M4509	2	8	9	5.7	4.5	0,32
		559M4509	2	9	9	5.7	4.5	1,65
		5510M4509	2	10	9	5.7	4.5	1,75
		551M4511	2	1	11	5.7	4.5	1,77
		552M4511	2	2	11	5.7	4.5	1,77
		553M4511	2	3	11	5.7	4.5	1,78
		554M4511	2	4	11	5.7	4.5	1,78
		555M4511	2	5	11	5.7	4.5	1,41
		556M4511	2	6	11	5.7	4.5	0,42
		557M4511	2	7	11	5.7	4.5	0,50
		558M4511	2	8	11	5.7	4.5	0,55
		559M4511	2	9	11	5.7	4.5	0,42
		5510M4511	2	10	11	5.7	4.5	0,50
		551M4513	2	1	13	5.7	4.5	0,55
		552M4513	2	2	13	5.7	4.5	0,32
		553M4513	2	3	13	5.7	4.5	1,65
		554M4513	2	4	13	5.7	4.5	1,75
		555M4513	2	5	13	5.7	4.5	1,77
		556M4513	2	6	13	5.7	4.5	1,77
		557M4513	2	7	13	5.7	4.5	1,78
		558M4513	2	8	13	5.7	4.5	1,78
		559M4513	2	9	13	5.7	4.5	1,41
		5510M4513	2	10	13	5.7	4.5	0,42
		551M5007	2	1	7	5.7	5	0,50
		552M5007	2	2	7	5.7	5	0,55
		553M5007	2	3	7	5.7	5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		554M5007	2	4	7	5.7	5	1,78
		555M5007	2	5	7	5.7	5	1,41
		556M5007	2	6	7	5.7	5	0,42
		557M5007	2	7	7	5.7	5	0,50
		558M5007	2	8	7	5.7	5	0,55
		559M5007	2	9	7	5.7	5	1,78
		5510M5007	2	10	7	5.7	5	1,41
		551M5009	2	1	9	5.7	5	0,42
		552M5009	2	2	9	5.7	5	0,50
		553M5009	2	3	9	5.7	5	0,55
		554M5009	2	4	9	5.7	5	0,32
		555M5009	2	5	9	5.7	5	1,65
		556M5009	2	6	9	5.7	5	1,41
		557M5009	2	7	9	5.7	5	0,42
		558M5009	2	8	9	5.7	5	1,78
		559M5009	2	9	9	5.7	5	1,41
		5510M5009	2	10	9	5.7	5	0,42
		551M5011	2	1	11	5.7	5	0,50
		552M5011	2	2	11	5.7	5	0,55
		553M5011	2	3	11	5.7	5	0,32
		554M5011	2	4	11	5.7	5	1,65
		555M5011	2	5	11	5.7	5	1,41
		556M5011	2	6	11	5.7	5	0,42
		557M5011	2	7	11	5.7	5	0,50
		558M5011	2	8	11	5.7	5	0,55
		559M5011	2	9	11	5.7	5	1,78
		5510M5011	2	10	11	5.7	5	1,78
		551M5013	2	1	13	5.7	5	1,41
		552M5013	2	2	13	5.7	5	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		553M5013	2	3	13	5.7	5	1,78
		554M5013	2	4	13	5.7	5	1,41
		555M5013	2	5	13	5.7	5	0,42
		556M5013	2	6	13	5.7	5	0,50
		557M5013	2	7	13	5.7	5	0,55
		558M5013	2	8	13	5.7	5	1,78
		559M5013	2	9	13	5.7	5	1,41
		5510M5013	2	10	13	5.7	5	0,42
		551M5507	2	1	7	5.7	5.5	0,50
		552M5507	2	2	7	5.7	5.5	0,55
		553M5507	2	3	7	5.7	5.5	0,32
		554M5507	2	4	7	5.7	5.5	1,65
		555M5507	2	5	7	5.7	5.5	1,41
		556M5507	2	6	7	5.7	5.5	0,42
		557M5507	2	7	7	5.7	5.5	1,78
		558M5507	2	8	7	5.7	5.5	1,41
		559M5507	2	9	7	5.7	5.5	0,42
		5510M5507	2	10	7	5.7	5.5	0,50
		551M5509	2	1	9	5.7	5.5	0,55
		552M5509	2	2	9	5.7	5.5	0,32
		553M5509	2	3	9	5.7	5.5	1,65
		554M5509	2	4	9	5.7	5.5	1,41
		555M5509	2	5	9	5.7	5.5	0,42
		556M5509	2	6	9	5.7	5.5	0,50
		557M5509	2	7	9	5.7	5.5	0,55
		558M5509	2	8	9	5.7	5.5	1,78
		559M5509	2	9	9	5.7	5.5	1,78
		5510M5509	2	10	9	5.7	5.5	1,41
		551M5511	2	1	11	5.7	5.5	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		552M5511	2	2	11	5.7	5.5	0,50
		553M5511	2	3	11	5.7	5.5	0,55
		554M5511	2	4	11	5.7	5.5	1,41
		555M5511	2	5	11	5.7	5.5	1,78
		556M5511	2	6	11	5.7	5.5	1,41
		557M5511	2	7	11	5.7	5.5	0,42
		558M5511	2	8	11	5.7	5.5	0,50
		559M5511	2	9	11	5.7	5.5	0,55
		5510M5511	2	10	11	5.7	5.5	0,32
		551M5513	2	1	13	5.7	5.5	1,65
		552M5513	2	2	13	5.7	5.5	1,41
		553M5513	2	3	13	5.7	5.5	0,42
		554M5513	2	4	13	5.7	5.5	0,50
		555M5513	2	5	13	5.7	5.5	0,55
		556M5513	2	6	13	5.7	5.5	1,78
		557M5513	2	7	13	5.7	5.5	1,41
		558M5513	2	8	13	5.7	5.5	0,42
		559M5513	2	9	13	5.7	5.5	0,50
		5510M5513	2	10	13	5.7	5.5	0,55
		551M6007	2	1	7	5.7	6	0,32
		552M6007	2	2	7	5.7	6	1,65
		553M6007	2	3	7	5.7	6	1,41
		554M6007	2	4	7	5.7	6	0,42
		555M6007	2	5	7	5.7	6	0,50
		556M6007	2	6	7	5.7	6	0,55
		557M6007	2	7	7	5.7	6	1,78
		558M6007	2	8	7	5.7	6	1,78
		559M6007	2	9	7	5.7	6	1,41
		5510M6007	2	10	7	5.7	6	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		551M6009	2	1	9	5.7	6	1,78
		552M6009	2	2	9	5.7	6	1,78
		553M6009	2	3	9	5.7	6	1,41
		554M6009	2	4	9	5.7	6	0,42
		555M6009	2	5	9	5.7	6	0,50
		556M6009	2	6	9	5.7	6	0,55
		557M6009	2	7	9	5.7	6	1,41
		558M6009	2	8	9	5.7	6	1,78
		559M6009	2	9	9	5.7	6	1,41
		5510M6009	2	10	9	5.7	6	0,42
		551M6011	2	1	11	5.7	6	0,50
		552M6011	2	2	11	5.7	6	0,55
		553M6011	2	3	11	5.7	6	1,78
		554M6011	2	4	11	5.7	6	1,78
		555M6011	2	5	11	5.7	6	1,41
		556M6011	2	6	11	5.7	6	0,42
		557M6011	2	7	11	5.7	6	0,50
		558M6011	2	8	11	5.7	6	0,55
		559M6011	2	9	11	5.7	6	1,41
		5510M6011	2	10	11	5.7	6	1,78
		551M6013	2	1	13	5.7	6	1,41
		552M6013	2	2	13	5.7	6	0,42
		553M6013	2	3	13	5.7	6	0,50
		554M6013	2	4	13	5.7	6	0,55
		555M6013	2	5	13	5.7	6	0,32
		556M6013	2	6	13	5.7	6	1,65
		557M6013	2	7	13	5.7	6	1,75
		558M6013	2	8	13	5.7	6	1,77
		559M6013	2	9	13	5.7	6	1,77

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, (±0,05 г)
		5510M6013	2	10	13	5.7	6	0,42
		551M6507	2	1	7	5.7	6.5	0,50
		552M6507	2	2	7	5.7	6.5	0,55
		553M6507	2	3	7	5.7	6.5	0,32
		554M6507	2	4	7	5.7	6.5	1,65
		555M6507	2	5	7	5.7	6.5	1,75
		556M6507	2	6	7	5.7	6.5	1,77
		557M6507	2	7	7	5.7	6.5	1,77
		558M6507	2	8	7	5.7	6.5	1,78
		559M6507	2	9	7	5.7	6.5	1,78
		5510M6507	2	10	7	5.7	6.5	1,41
		551M6509	2	1	9	5.7	6.5	0,42
		552M6509	2	2	9	5.7	6.5	0,50
		553M6509	2	3	9	5.7	6.5	0,55
		554M6509	2	4	9	5.7	6.5	0,42
		555M6509	2	5	9	5.7	6.5	0,50
		556M6509	2	6	9	5.7	6.5	0,55
		557M6509	2	7	9	5.7	6.5	0,32
		558M6509	2	8	9	5.7	6.5	1,65
		559M6509	2	9	9	5.7	6.5	1,75
		5510M6509	2	10	9	5.7	6.5	1,77
		551M6511	2	1	11	5.7	6.5	1,77
		552M6511	2	2	11	5.7	6.5	1,78
		553M6511	2	3	11	5.7	6.5	1,78
		554M6511	2	4	11	5.7	6.5	1,41
		555M6511	2	5	11	5.7	6.5	0,42
		556M6511	2	6	11	5.7	6.5	0,50
		557M6511	2	7	11	5.7	6.5	0,55
		558M6511	2	8	11	5.7	6.5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		559M6511	2	9	11	5.7	6.5	0,30
		5510M6511	2	10	11	5.7	6.5	0,38
		551M6513	2	1	13	5.7	6.5	0,42
		552M6513	2	2	13	5.7	6.5	0,50
		553M6513	2	3	13	5.7	6.5	0,55
		554M6513	2	4	13	5.7	6.5	0,32
		555M6513	2	5	13	5.7	6.5	1,65
		556M6513	2	6	13	5.7	6.5	1,75
		557M6513	2	7	13	5.7	6.5	1,77
		558M6513	2	8	13	5.7	6.5	1,77
		559M6513	2	9	13	5.7	6.5	1,78
		5510M6513	2	10	13	5.7	6.5	1,78
		601M5007	2	1	7	6	5	1,41
		602M5007	2	2	7	6	5	0,42
		603M5007	2	3	7	6	5	0,50
		604M5007	2	4	7	6	5	0,55
		605M5007	2	5	7	6	5	0,32
		606M5007	2	6	7	6	5	1,65
		607M5007	2	7	7	6	5	1,75
		608M5007	2	8	7	6	5	1,77
		609M5007	2	9	7	6	5	1,77
		6010M5007	2	10	7	6	5	1,78
		601M5009	2	1	9	6	5	1,78
		602M5009	2	2	9	6	5	1,41
		603M5009	2	3	9	6	5	0,42
		604M5009	2	4	9	6	5	0,50
		605M5009	2	5	9	6	5	1,78
		606M5009	2	6	9	6	5	1,41
		607M5009	2	7	9	6	5	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, (±0,05 г)
		608M5009	2	8	9	6	5	1,78
		609M5009	2	9	9	6	5	1,41
		6010M5009	2	10	9	6	5	1,41
		601M5011	2	1	11	6	5	1,64
		602M5011	2	2	11	6	5	1,65
		603M5011	2	3	11	6	5	1,75
		604M5011	2	4	11	6	5	1,77
		605M5011	2	5	11	6	5	1,77
		606M5011	2	6	11	6	5	1,78
		607M5011	2	7	11	6	5	1,41
		608M5011	2	8	11	6	5	1,75
		609M5011	2	9	11	6	5	0,30
		6010M5011	2	10	11	6	5	0,38
		601M5013	2	1	13	6	5	0,42
		602M5013	2	2	13	6	5	0,50
		603M5013	2	3	13	6	5	1,64
		604M5013	2	4	13	6	5	1,65
		605M5013	2	5	13	6	5	1,75
		606M5013	2	6	13	6	5	1,77
		607M5013	2	7	13	6	5	1,77
		608M5013	2	8	13	6	5	1,78
		609M5013	2	9	13	6	5	1,41
		6010M5013	2	10	13	6	5	1,65
		601M5507	2	1	7	6	5.5	1,75
		602M5507	2	2	7	6	5.5	1,77
		603M5507	2	3	7	6	5.5	1,77
		604M5507	2	4	7	6	5.5	1,78
		605M5507	2	5	7	6	5.5	1,78
		606M5507	2	6	7	6	5.5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		607M5507	2	7	7	6	5.5	0,65
		608M5507	2	8	7	6	5.5	1,75
		609M5507	2	9	7	6	5.5	1,75
		6010M5507	2	10	7	6	5.5	1,77
		601M5509	2	1	9	6	5.5	1,77
		602M5509	2	2	9	6	5.5	1,78
		603M5509	2	3	9	6	5.5	1,41
		604M5509	2	4	9	6	5.5	1,75
		605M5509	2	5	9	6	5.5	1,75
		606M5509	2	6	9	6	5.5	1,64
		607M5509	2	7	9	6	5.5	1,65
		608M5509	2	8	9	6	5.5	1,75
		609M5509	2	9	9	6	5.5	1,75
		6010M5509	2	10	9	6	5.5	0,65
		601M5511	2	1	11	6	5.5	0,66
		602M5511	2	2	11	6	5.5	0,66
		603M5511	2	3	11	6	5.5	1,75
		604M5511	2	4	11	6	5.5	1,64
		605M5511	2	5	11	6	5.5	1,65
		606M5511	2	6	11	6	5.5	1,75
		607M5511	2	7	11	6	5.5	1,75
		608M5511	2	8	11	6	5.5	0,65
		609M5511	2	9	11	6	5.5	0,66
		6010M5511	2	10	11	6	5.5	0,66
		601M5513	2	1	13	6	5.5	0,67
		602M5513	2	2	13	6	5.5	1,64
		603M5513	2	3	13	6	5.5	1,65
		604M5513	2	4	13	6	5.5	1,75
		605M5513	2	5	13	6	5.5	1,75

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		606M5513	2	6	13	6	5.5	0,28
		607M5513	2	7	13	6	5.5	0,30
		608M5513	2	8	13	6	5.5	0,38
		609M5513	2	9	13	6	5.5	0,42
		6010M5513	2	10	13	6	5.5	0,50
		601M6507	2	1	7	6	6.5	0,55
		602M6507	2	2	7	6	6.5	0,32
		603M6507	2	3	7	6	6.5	0,47
		604M6507	2	4	7	6	6.5	0,55
		605M6507	2	5	7	6	6.5	0,65
		606M6507	2	6	7	6	6.5	1,75
		607M6507	2	7	7	6	6.5	1,75
		608M6507	2	8	7	6	6.5	1,77
		609M6507	2	9	7	6	6.5	1,77
		6010M6507	2	10	7	6	6.5	1,78
		601M6509	2	1	9	6	6.5	1,41
		602M6509	2	2	9	6	6.5	1,41
		603M6509	2	3	9	6	6.5	1,64
		604M6509	2	4	9	6	6.5	1,65
		605M6509	2	5	9	6	6.5	1,75
		606M6509	2	6	9	6	6.5	1,75
		607M6509	2	7	9	6	6.5	1,64
		608M6509	2	8	9	6	6.5	1,65
		609M6509	2	9	9	6	6.5	1,75
		6010M6509	2	10	9	6	6.5	1,75
		601M6511	2	1	11	6	6.5	1,75
		602M6511	2	2	11	6	6.5	1,77
		603M6511	2	3	11	6	6.5	1,77
		604M6511	2	4	11	6	6.5	1,77

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		605M6511	2	5	11	6	6.5	0,48
		606M6511	2	6	11	6	6.5	0,55
		607M6511	2	7	11	6	6.5	0,65
		608M6511	2	8	11	6	6.5	0,66
		609M6511	2	9	11	6	6.5	0,66
		6010M6511	2	10	11	6	6.5	0,67
		601M6513	2	1	13	6	6.5	0,68
		602M6513	2	2	13	6	6.5	1,41
		603M6513	2	3	13	6	6.5	1,41
		604M6513	2	4	13	6	6.5	1,64
		605M6513	2	5	13	6	6.5	1,65
		606M6513	2	6	13	6	6.5	1,75
		607M6513	2	7	13	6	6.5	1,75
		608M6513	2	8	13	6	6.5	1,75
		609M6513	2	9	13	6	6.5	1,77
		6010M6513	2	10	13	6	6.5	1,77
		651M5507	2	1	7	6.5	5.5	1,78
		652M5507	2	2	7	6.5	5.5	1,41
		653M5507	2	3	7	6.5	5.5	1,41
		654M5507	2	4	7	6.5	5.5	1,64
		655M5507	2	5	7	6.5	5.5	1,65
		656M5507	2	6	7	6.5	5.5	1,75
		657M5507	2	7	7	6.5	5.5	1,75
		658M5507	2	8	7	6.5	5.5	1,75
		659M5507	2	9	7	6.5	5.5	1,77
		6510M5507	2	10	7	6.5	5.5	1,77
		651M5509	2	1	9	6.5	5.5	1,77
		652M5509	2	2	9	6.5	5.5	1,77
		653M5509	2	3	9	6.5	5.5	1,78

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		654M5509	2	4	9	6.5	5.5	1,77
		655M5509	2	5	9	6.5	5.5	1,78
		656M5509	2	6	9	6.5	5.5	1,81
		657M5509	2	7	9	6.5	5.5	1,84
		658M5509	2	8	9	6.5	5.5	1,78
		659M5509	2	9	9	6.5	5.5	1,81
		6510M5509	2	10	9	6.5	5.5	1,88
		651M5511	2	1	11	6.5	5.5	1,89
		652M5511	2	2	11	6.5	5.5	1,90
		653M5511	2	3	11	6.5	5.5	1,91
		654M5511	2	4	11	6.5	5.5	1,93
		655M5511	2	5	11	6.5	5.5	1,95
		656M5511	2	6	11	6.5	5.5	1,96
		657M5511	2	7	11	6.5	5.5	1,98
		658M5511	2	8	11	6.5	5.5	1,98
		659M5511	2	9	11	6.5	5.5	1,99
		6510M5511	2	10	11	6.5	5.5	0,28
		651M5513	2	1	13	6.5	5.5	0,30
		652M5513	2	2	13	6.5	5.5	0,38
		653M5513	2	3	13	6.5	5.5	0,42
		654M5513	2	4	13	6.5	5.5	0,50
		655M5513	2	5	13	6.5	5.5	0,55
		656M5513	2	6	13	6.5	5.5	0,32
		657M5513	2	7	13	6.5	5.5	0,47
		658M5513	2	8	13	6.5	5.5	0,55
		659M5513	2	9	13	6.5	5.5	0,65
		6510M5513	2	10	13	6.5	5.5	0,66
		651M6007	2	1	7	6.5	6	0,67
		652M6007	2	2	7	6.5	6	0,68

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		653M6007	2	3	7	6.5	6	0,52
		654M6007	2	4	7	6.5	6	0,59
		655M6007	2	5	7	6.5	6	0,35
		656M6007	2	6	7	6.5	6	0,45
		657M6007	2	7	7	6.5	6	0,55
		658M6007	2	8	7	6.5	6	0,65
		659M6007	2	9	7	6.5	6	0,76
		6510M6007	2	10	7	6.5	6	0,44
		651M6009	2	1	9	6.5	6	0,57
		652M6009	2	2	9	6.5	6	0,69
		653M6009	2	3	9	6.5	6	0,81
		654M6009	2	4	9	6.5	6	0,93
		655M6009	2	5	9	6.5	6	1,31
		656M6009	2	6	9	6.5	6	1,31
		657M6009	2	7	9	6.5	6	1,40
		658M6009	2	8	9	6.5	6	1,41
		659M6009	2	9	9	6.5	6	1,41
		6510M6009	2	10	9	6.5	6	1,64
		651M6011	2	1	11	6.5	6	1,65
		652M6011	2	2	11	6.5	6	1,75
		653M6011	2	3	11	6.5	6	1,75
		654M6011	2	4	11	6.5	6	1,75
		655M6011	2	5	11	6.5	6	1,77
		656M6011	2	6	11	6.5	6	1,77
		657M6011	2	7	11	6.5	6	1,78
		658M6011	2	8	11	6.5	6	1,81
		659M6011	2	9	11	6.5	6	1,84
		6510M6011	2	10	11	6.5	6	1,78
		651M6013	2	1	13	6.5	6	1,81

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		652M6013	2	2	13	6.5	6	0,45
		653M6013	2	3	13	6.5	6	0,55
		654M6013	2	4	13	6.5	6	0,65
		655M6013	2	5	13	6.5	6	0,76
		656M6013	2	6	13	6.5	6	0,44
		657M6013	2	7	13	6.5	6	0,57
		658M6013	2	8	13	6.5	6	0,69
		659M6013	2	9	13	6.5	6	0,81
		6510M6013	2	10	13	6.5	6	0,93
		651M6507	2	1	7	6.5	6.5	1,31
		652M6507	2	2	7	6.5	6.5	1,31
		653M6507	2	3	7	6.5	6.5	1,40
		654M6507	2	4	7	6.5	6.5	1,41
		655M6507	2	5	7	6.5	6.5	1,41
		656M6507	2	6	7	6.5	6.5	1,64
		657M6507	2	7	7	6.5	6.5	1,65
		658M6507	2	8	7	6.5	6.5	1,75
		659M6507	2	9	7	6.5	6.5	1,75
		6510M6507	2	10	7	6.5	6.5	1,75
		651M6509	2	1	9	6.5	6.5	1,77
		652M6509	2	2	9	6.5	6.5	1,77
		653M6509	2	3	9	6.5	6.5	1,78
		654M6509	2	4	9	6.5	6.5	1,81
		655M6509	2	5	9	6.5	6.5	1,84
		656M6509	2	6	9	6.5	6.5	0,28
		657M6509	2	7	9	6.5	6.5	0,36
		658M6509	2	8	9	6.5	6.5	0,52
		659M6509	2	9	9	6.5	6.5	0,59
		6510M6509	2	10	9	6.5	6.5	0,35

Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм ($\pm 1\%$)	Длина (L2), мм ($\pm 1\%$)	Длина имплантации (L3), мм ($\pm 1\%$)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
	651M6511	2	1	11	6.5	6.5	0,26
	652M6511	2	2	11	6.5	6.5	0,28
	653M6511	2	3	11	6.5	6.5	0,36
	654M6511	2	4	11	6.5	6.5	0,44
	655M6511	2	5	11	6.5	6.5	0,52
	656M6511	2	6	11	6.5	6.5	0,59
	657M6511	2	7	11	6.5	6.5	0,35
	658M6511	2	8	11	6.5	6.5	0,45
	659M6511	2	9	11	6.5	6.5	0,55
	6510M6511	2	10	11	6.5	6.5	0,65
	651M6513	2	1	13	6.5	6.5	0,76
	652M6513	2	2	13	6.5	6.5	0,81
	653M6513	2	3	13	6.5	6.5	0,93
	654M6513	2	4	13	6.5	6.5	1,31
	655M6513	2	5	13	6.5	6.5	1,31
	656M6513	2	6	13	6.5	6.5	1,40
	657M6513	2	7	13	6.5	6.5	1,41
	658M6513	2	8	13	6.5	6.5	1,41
	659M6513	2	9	13	6.5	6.5	1,64
	6510M6513	2	10	13	6.5	6.5	1,64

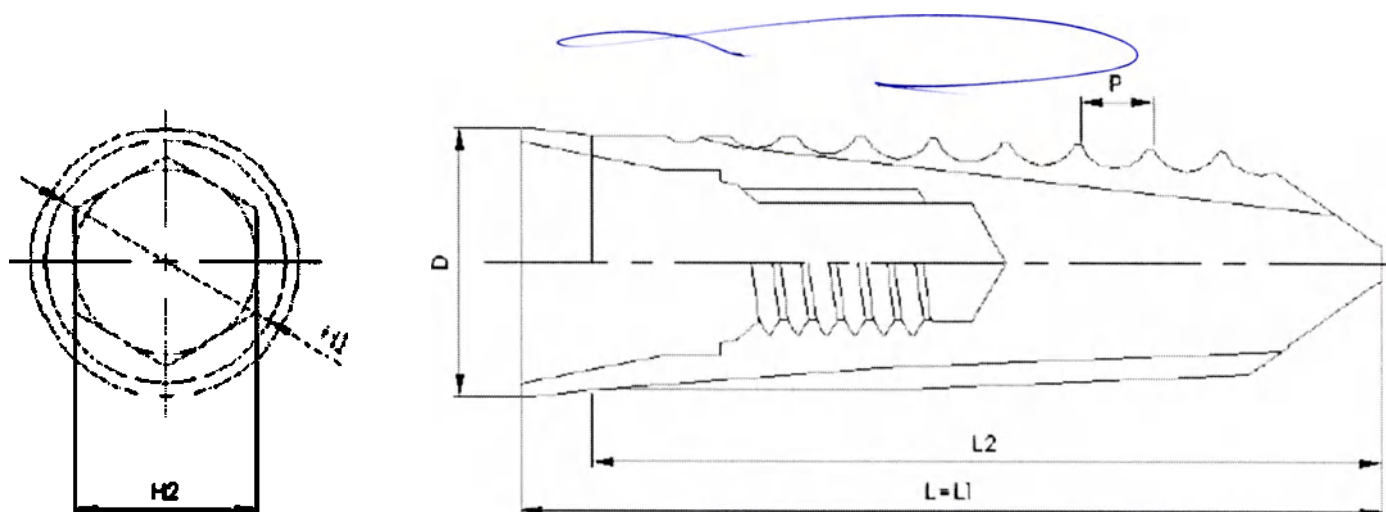


Рис. 3. Имплантаты дентальные IBS NR Fix IBS3009

Шероховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)

Допустимое отклонение ± 0.05 мм

Наружная резьба: радиус резьбы $= 0.5 \pm 0.05$ мм, макс. диаметр $= 3.2 \pm 0.05$ мм, мин. диаметр $= 2.5 \pm 0.05$ мм, метрическая

Внутренняя резьба: диаметр $= 2.0 \pm 0.05$ мм, шаг $= 0.4 \pm 0.05$ мм, метрическая

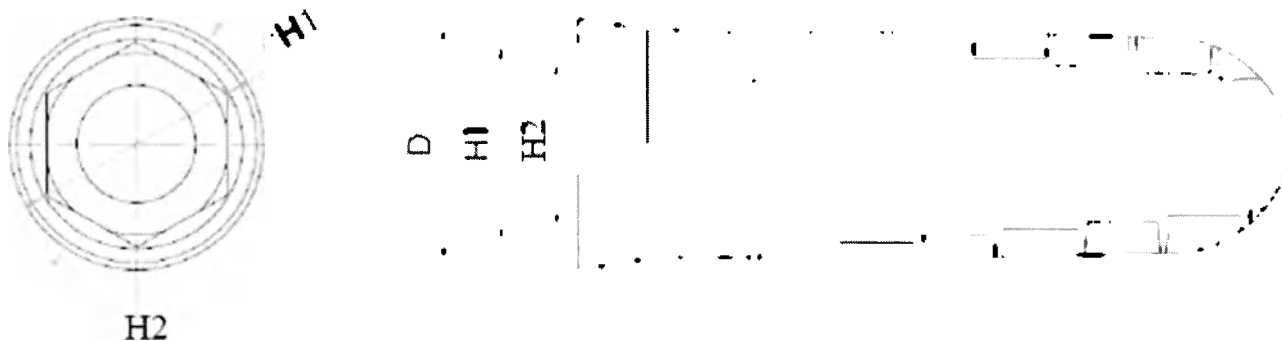


Рис. 4. Имплантаты дентальные IBS NR Fix FC3009- FC3513

Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)

Допустимое отклонение ± 0.05 мм

Наружная резьба: радиус резьбы $= 0.5 \pm 0.05$ мм, макс. диаметр $= 3.2 \pm 0.05$ мм, мин. диаметр $= 2.5 \pm 0.05$ мм, метрическая

Внутренняя резьба: диаметр $= 2.0 \pm 0.05$ мм, шаг $= 0.4 \pm 0.05$ мм, метрическая

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Длина L, мм ($\pm 1\%$)	Длина имплантации L1, мм ($\pm 1\%$)	Длина обработки поверхности L2, мм ($\pm 1\%$)	Расстояние P, мм ($\pm 1\%$)	Главная часть (гексагональный) H1 (± 0.05 мм)	Главная часть (гексагональный) H2 (± 0.05 мм)	Масса, г (± 0.05 г)
3.	Имплантаты дентальные IBS NR Fix	IBS3009	3.8	11	11	9	1	3.33	2.5	0.81
		FC3009	3.5	10	9	9	1.15	2.5	2.94	0.93
		FC3011	3.5	12	11	11	1.15	2.5	2.94	1.31
		FC3013	3.5	14	13	13	1.15	2.5	2.94	1.31
		FC3509	3.5	9	9	9	1.15	2.5	2.94	1.40
		FC3511	3.5	11	11	11	1.15	2.5	2.94	1.41
		FC3513	3.5	13	13	13	1.15	2.5	2.94	1.42

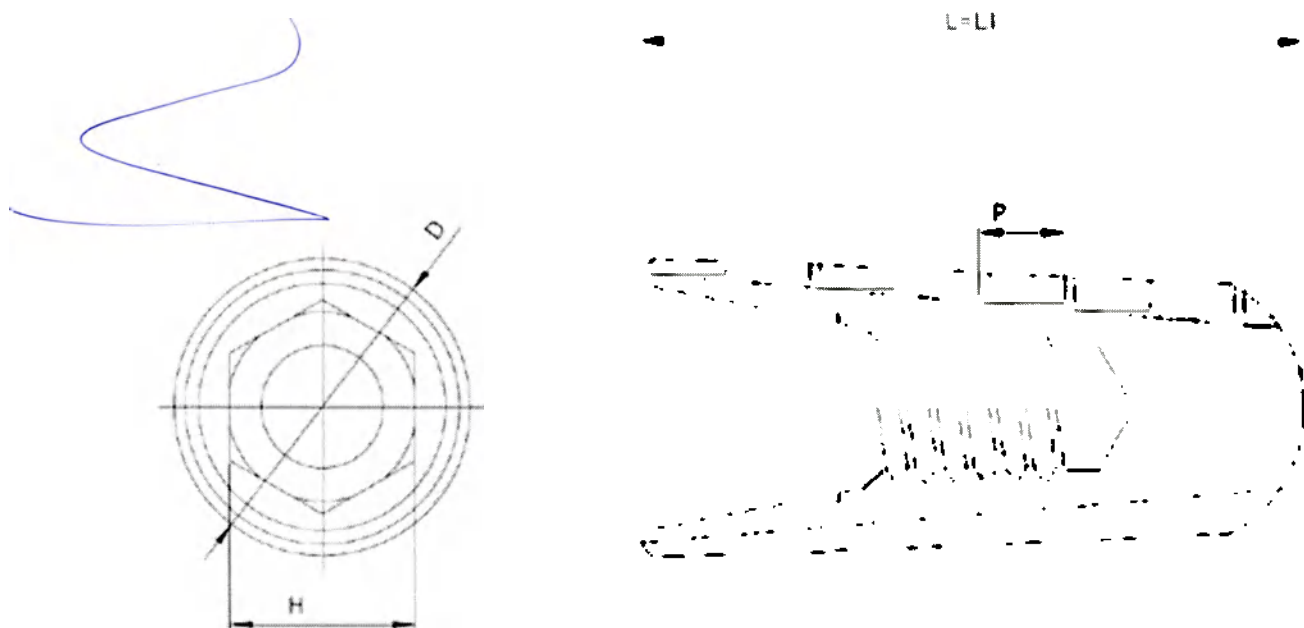


Рис. 5. Имплантаты дентальные IBS Magic FC IBS4007F

Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)

Наружная резьба: макс. диаметр $= 4 \pm 0.05$ мм, мин. диаметр $= 2.62 \pm 0.05$ мм, шаг $= 1.15 \pm 0.05$ мм, метрическая

Внутренняя резьба: диаметр $= 2.00 \pm 0.05$ мм, шаг $= 0.4 \pm 0.05$ мм, метрическая

		для заказа)	мм (±1%)	(±1%)	имплантации L1, мм (±1%)	R, мм (±1%)	(гексагональ- ный) H (±0.05 мм)	(±0,05 г)
4.	Имплантаты дентальные IBS Magic FC	IBS4007F	4.0	7	7	1.15	2.5	0,45
		IBS4009F	4.0	9	9	1.15	2.5	0,55
		IBS4011F	4.0	11	11	1.15	2.5	0,65
		IBS4013F	4.0	13	13	1.15	2.5	0,76
		IBS4015F	4.0	15	15	1.15	2.5	0,44
		IBS4507F	4.5	7	7	1.15	2.5	0,57
		IBS4509F	4.5	9	9	1.15	2.5	0,69
		IBS4511F	4.5	11	11	1.15	2.5	0,81
		IBS4513F	4.5	13	13	1.15	2.5	0,93
		IBS4515F	4.5	15	15	1.15	2.5	1,31
		IBS5007F	5.0	7	7	1.15	2.5	1,31
		IBS5009F	5.0	9	9	1.15	2.5	1,40
		IBS5011F	5.0	11	11	1.15	2.5	1,41
		IBS5013F	5.0	13	13	1.15	2.5	1,41
		IBS5015F	5.0	15	15	1.15	2.5	1,64
		IBS5507F	5.5	7	7	1.15	2.5	1,65
		IBS5509F	5.5	9	9	1.15	2.5	1,75
		IBS5511F	5.5	11	11	1.15	2.5	1,75
		IBS5513F	5.5	13	13	1.15	2.5	1,75
		IBS5515F	5.5	15	15	1.15	2.5	1,77
		IBS6007F	6.0	7	7	1.15	2.5	1,77
		IBS6009F	6.0	9	9	1.15	2.5	1,78
		IBS6011F	6.0	11	11	1.15	2.5	1,81
		IBS6013F	6.0	13	13	1.15	2.5	1,84
		IBS6015F	6.0	15	15	1.15	2.5	0,28
		IBS6507F	6.5	7	7	1.15	2.5	0,36
		IBS6509F	6.5	9	9	1.15	2.5	0,52
		IBS6511F	6.5	11	11	1.15	2.5	0,59
		IBS6513F	6.5	13	13	1.15	2.5	0,35
		IBS6515F	6.5	15	15	1.15	2.5	1,41

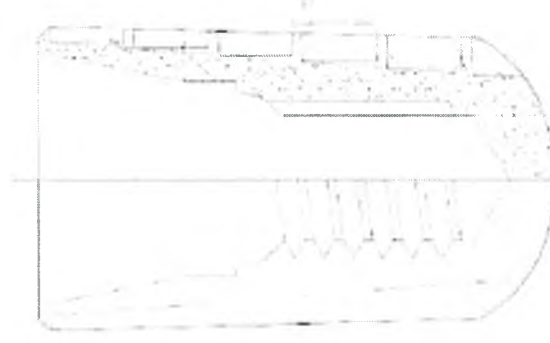
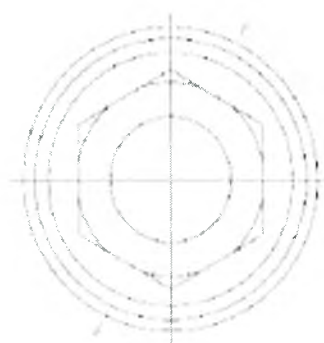


Рис. 6. Имплантаты дентальные IBS Magic FC (Cutting edge) IBS4007FC

Допустимое отклонение ± 0.05 мм

Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8 мк)

Наружная резьба: макс. диаметр 4 ± 0.05 мм, мин. диаметр 2.62 ± 0.05 мм, шаг 1.15 ± 0.05 мм, метрическая

Внутренняя резьба: диаметр 2.00 ± 0.05 мм, шаг 0.4 ± 0.05 мм, метрическая

№	наименование	Артикул (код для заказа)	Диаметр D, мм (±1%)	Длина L, мм (±1%)	Длина имплантации L1, мм (±1%)	Расстояние P, мм (±1%)	Главная часть (гексагональ- ный) H (±0.05 мм)	Масса, г (±0,05 г)
5.	Имплантаты дентальные IBS Magic FC (Cutting edge)	IBS4007FC	4.0	7	7	1.15	2.5	1,41
		IBS4009FC	4.0	9	9	1.15	2.5	1,64
		IBS4011FC	4.0	11	11	1.15	2.5	1,65
		IBS4013FC	4.0	13	13	1.15	2.5	1,75
		IBS4015FC	4.0	15	15	1.15	2.5	1,75
		IBS4507FC	4.5	7	7	1.15	2.5	1,75

		IBS4511FC	4.5	11	11	1.15	2.5	1,77
		IBS4513FC	4.5	13	13	1.15	2.5	1,78
		IBS4515FC	4.5	15	15	1.15	2.5	1,8
		IBS5007FC	5.0	7	7	1.15	2.5	1,84
		IBS5009FC	5.0	9	9	1.15	2.5	1,78
		IBS5011FC	5.0	11	11	1.15	2.5	1,75
		IBS5013FC	5.0	13	13	1.15	2.5	1,77
		IBS5015FC	5.0	15	15	1.15	2.5	1,77

	IBS5507FC	5.5	7	7	1.15	2.5	0.50
	IBS5509FC	5.5	9	9	1.15	2.5	0.55
	IBS5511FC	5.5	11	11	1.15	2.5	0.32
	IBS5513FC	5.5	13	13	1.15	2.5	0.47
	IBS5515FC	5.5	15	15	1.15	2.5	0.55
	IBS6007FC	6.0	7	7	1.15	2.5	0.65
	IBS6009FC	6.0	9	9	1.15	2.5	0.66
	IBS6011FC	6.0	11	11	1.15	2.5	0.67
	IBS6013FC	6.0	13	13	1.15	2.5	0.68
	IBS6015FC	6.0	15	15	1.15	2.5	1.96
	IBS6507FC	6.5	7	7	1.15	2.5	1.98
	IBS6509FC	6.5	9	9	1.15	2.5	1.98
	IBS6511FC	6.5	11	11	1.15	2.5	1.99
	IBS6513FC	6.5	13	13	1.15	2.5	0.28
	IBS6515FC	6.5	15	15	1.15	2.5	0.30

Таблица 2. 1. Технические характеристики принадлежностей

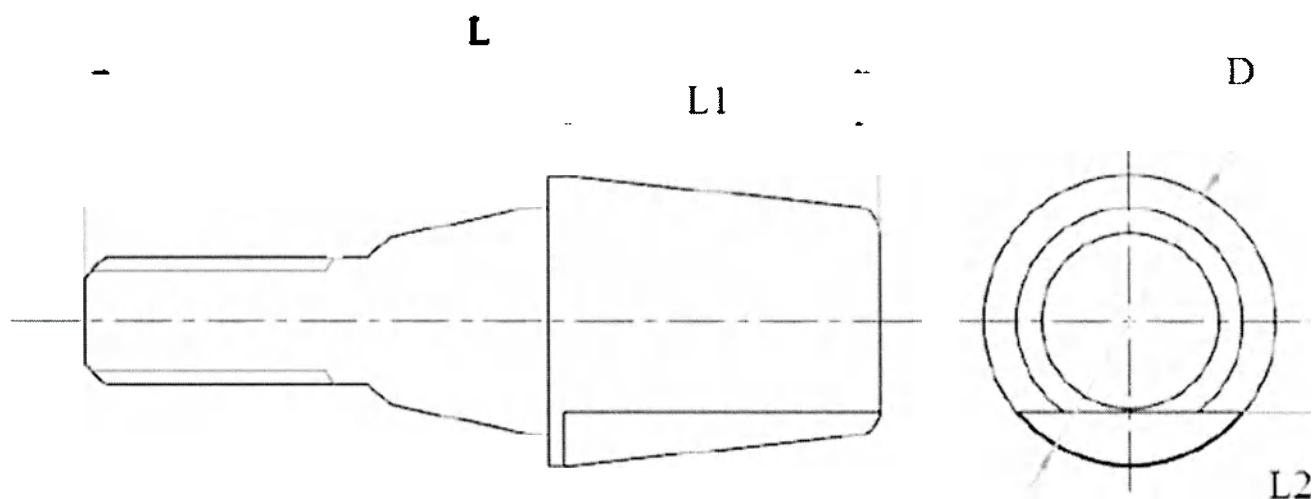


Рис. 7. Абатмент Magicore
Допустимое отклонение ± 0.05 мм
Наружняя резьба: диаметр 1.6 ± 0.05 мм, шаг 0.35 ± 0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Длина L, мм ($\pm 1\%$)	Длина имплантации L1, мм ($\pm 1\%$)	Длина обработки поверхности L2, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
1.	Абатмент Magicore	MA4502	3.5	7.6	2	1.1	1,77
		MA4503	3.5	8.6	3	1.1	1,78
		MA4504	3.5	9.6	4	1.1	1,81
		MA4505	3.5	10.6	5	1.1	1,84
		MA4506	3.5	11.6	6	1.1	1,78
		MA5002	3.86	7.6	2	1.1	1,81
		MA5003	3.86	8.6	3	1.1	1,88
		MA5004	3.86	9.6	4	1.1	1,89
		MA5005	3.86	10.6	5	1.1	1,90
		MA5006	3.86	11.6	6	1.1	1,91
		MA5002	4.3	7.6	2	1.55	1,93
		MA5503	4.3	8.6	3	1.55	1,95
		MA5504	4.3	9.6	4	1.55	1,75
		MA5505	4.3	10.6	5	1.55	1,77
		MA5506	4.3	11.6	6	1.55	1,77
		MA6002	4.6	7.6	2	1.55	1,77
		MA6003	4.6	8.6	3	1.55	1,77
		MA6004	4.6	9.6	4	1.55	1,78

		MA6005	4.6	10.6	5	1.55	1,64
		MA6006	4.6	11.6	6	1.55	1,65

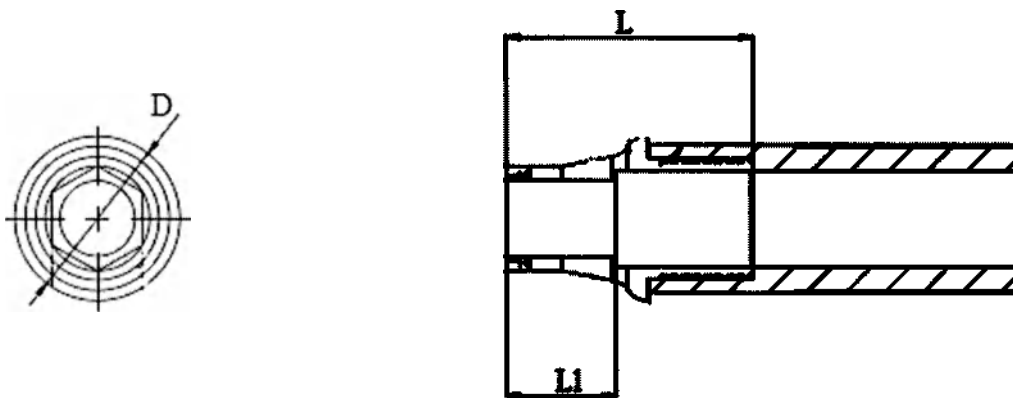


Рис. 8. Абатмент UCLA, Абатмент пластиковый UCLA
Допустимое отклонение: менее 6 мм ± 0.05 мм, выше 6 мм ± 0.1 мм
Диаметр резьбы $= 2.00 \pm 0.05$ мм, шаг $= 0.4 \pm 0.05$ мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Длина имплантации L1, мм ($\pm 1\%$)	Длина абатмента L, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
2.	Абатмент UCLA	FUCH3501	3.5	1	6.8	1,41
		FUCH3502	3.5	2	7.8	1,64
		FUCH3503	3.5	3	8.8	1,65
		FUCH3504	3.5	4	9.8	1,75
		FUCH4001	4	1	6.8	1,75
		FUCH4002	4	2	7.8	1,77

		FUCH4003	4	3	8.8	1,64
		FUCH4004	4	4	9.8	1,65
		FUCH4501	4.5	1	6.8	1,75
		FUCH4502	4.5	2	7.8	1,75
		FUCH4503	4.5	3	8.8	1,75
		FUCH4504	4.5	4	9.8	1,77
		FUCH5001	5	1	6.8	1,77
		FUCH5002	5	2	7.8	1,77
		FUCH5003	5	3	8.8	1,77
		FUCH5004	5	4	9.8	1,77
		FUCH5501	5.5	1	6.8	1,78
		FUCH5502	5.5	2	7.8	1,41
		FUCH5503	5.5	3	8.8	1,41
		FUCH5504	5.5	4	9.8	1,64
		FUCN3501	3.5	1	6.8	1,41
		FUCN3502	3.5	2	7.8	1,64
		FUCN3503	3.5	3	8.8	1,65
		FUCN3504	3.5	4	9.8	1,75
		FUCN4001	4	1	6.8	1,75
		FUCN4002	4	2	7.8	1,77
		FUCN4003	4	3	8.8	1,64
		FUCN4004	4	4	9.8	1,65
		FUCN4501	4.5	1	6.8	1,75
		FUCN4502	4.5	2	7.8	1,75
		FUCN4503	4.5	3	8.8	1,75
		FUCN4504	4.5	4	9.8	1,77
		FUCN5001	5	1	6.8	1,77
		FUCN5002	5	2	7.8	1,77
		FUCN5003	5	3	8.8	1,77
		FUCN5004	5	4	9.8	1,77
		FUCN5501	5.5	1	6.8	1,78
		FUCN5502	5.5	2	7.8	1,41
		FUCN5503	5.5	3	8.8	1,41
		FUCN5504	5.5	4	9.8	1,64
3.	Абатмент пластиковый UCLA	FUPH3501	3.5	1	6.8	1,65
		FUPH3502	3.5	2	7.8	1,75
		FUPH3503	3.5	3	8.8	1,75
		FUPH3504	3.5	4	9.8	0,28
		FUPH4001	4	1	6.8	0,30
		FUPH4002	4	2	7.8	0,38
		FUPH4003	4	3	8.8	0,42
		FUPH4004	4	4	9.8	0,50
		FUPH4501	4.5	1	6.8	0,55
		FUPH4502	4.5	2	7.8	0,32
		FUPH4503	4.5	3	8.8	0,47
		FUPH4504	4.5	4	9.8	0,55
		FUPH5001	5	1	6.8	0,65
		FUPH5002	5	2	7.8	1,75

	FUPH5004	5	4	7.0	1,07
	FUPH5501	5.5	1	6.8	1,65
	FUPH5502	5.5	2	7.8	1,75
	FUPH5503	5.5	3	8.8	1,76
	FUPH5504	5.5	4	9.8	1,77



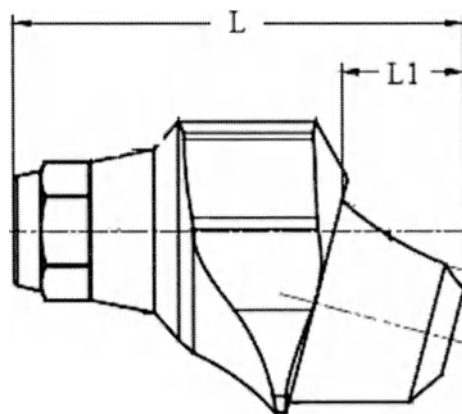


Рис. 9 Абатмент мультнионит
 Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
 Допустимое отклонение=±0.05 мм
 Внутренняя резьба: диаметр=1.4±0.05 мм, шаг=0.3±0.05 мм, метрическая

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Высота манжеты L1, мм	Длина абатмента L, мм (±1%)	Гексагональный Н, мм (±0.05мм)	Масса, г (±0,05 г)
4.	Абатмент мультнионит	FMH351060	1	6		0,65
		FMH352070	2	7		1,75
		FMH353080	3	8		1,75
		FMH354090	4	9		1,77
		FMH355100	5	10		1,78
		FMH351061	1	6		1,79

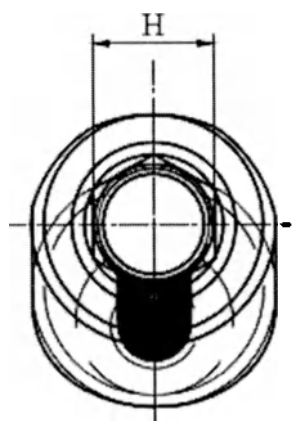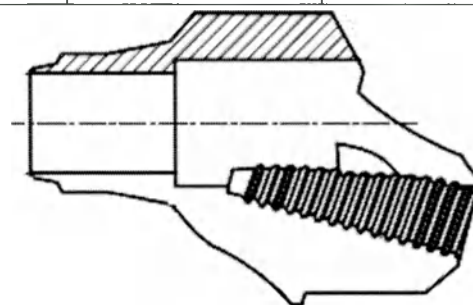

		FMH351071	1	7
		FMH351081	1	8
		FMH351091	1	9
		FMH351101	1	10
		FMH352071	2	7
		FMH352081	2	8
		FMH352091	2	9
		FMH352101	2	10
		FMH353111	2	11
		FMH353081	3	8
		FMH353091	3	9
		FMH353101	3	10
		FMH353111	3	11
		FMH353121	3	12
		FMH354091	4	9
		FMH354101	4	10
		FMH354111	4	11
		FMH354121	4	12
		FMH354131	4	13
		FMH355101	5	10
		FMH355111	5	11
		FMH355121	5	12
		FMH355131	5	13
		FMH355141	5	14
		FMH352073	2	7
		FMH352083	2	8
		FMH352093	2	9
		FMH352103	2	10
		FMH353113	2	11
		FMH353083	3	8
		FMH353093	3	9

2.5

1,64

1,65

1,75

1,75

0,65

0,66

0,66

1,75

1,64

1,65

1,75

1,75

0,65

0,66

0,66

0,67

1,64

1,65

1,75

1,64

1,65

1,75

1,75

0,65

0,66

0,66

1,78

1,41

1,65

1,75


1,77

		FMH353103	3	10	1,78
		FMH353113	3	11	1,78
		FMH353123	3	12	1,41
		FMH354093	4	9	0,42
		FMH354103	4	10	0,50
		FMH354113	4	11	0,55
		FMH354123	4	12	0,32
		FMH354133	4	13	1,65
		FMH355103	5	10	1,75
		FMH355113	5	11	1,76
		FMH355123	5	12	1,77
		FMH355133	5	13	1,77
		FMH355143	5	14	1,78
		FMH401060	1	6	1,65
		FMH402070	2	7	1,75
		FMH403080	3	8	1,77
		FMH404090	4	9	1,77
		FMH405100	5	10	1,78
		FMH401061	1	6	1,78
		FMH401071	1	7	1,41
		FMH401081	1	8	0,42
		FMH401091	1	9	0,50
		FMH401101	1	10	0,55
		FMH402071	2	7	0,42
		FMH402081	2	8	0,50
		FMH402091	2	9	0,55
		FMH402101	2	10	0,32
		FMH403111	2	11	1,65
		FMH403081	3	8	1,78
		FMH403091	3	9	1,41
		FMH403101	3	10	0,42

		FMH403111	3	11	1,78
		FMH403121	3	12	1,78
		FMH404091	4	9	1,41
		FMH404101	4	10	0,42
		FMH404111	4	11	0,50
		FMH404121	4	12	1,78
		FMH404131	4	13	1,41
		FMH405101	5	10	0,42
		FMH405111	5	11	0,50
		FMH405121	5	12	0,55
		FMH405131	5	13	1,78
		FMH405141	5	14	1,41
		FMH402073	2	7	1,78
		FMH402083	2	8	1,41
		FMH402093	2	9	0,42
		FMH402103	2	10	0,50
		FMH403113	2	11	0,55
		FMH403083	3	8	1,78
		FMH403093	3	9	1,78
		FMH403103	3	10	1,41
		FMH403113	3	11	0,42
		FMH403123	3	12	0,50
		FMH404093	4	9	0,55
		FMH404103	4	10	0,55
		FMH404113	4	11	0,32
		FMH404123	4	12	1,65
		FMH404133	4	13	1,75
		FMH405103	5	10	1,77
		FMH405113	5	11	1,65
		FMH405123	5	12	1,75
		FMH405133	5	13	1,77

		FMH45143	5	14	1,77
		FMH451060	1	6	1,78
		FMH452070	2	7	1,78
		FMH453080	3	8	1,41
		FMH454590	4	9	0,42
		FMH455100	5	10	0,50
		FMH451061	1	6	0,30
		FMH451071	1	7	0,38
		FMH451081	1	8	0,42
		FMH451091	1	9	0,50
		FMH451101	1	10	0,55
		FMH452071	2	7	0,32
		FMH452081	2	8	1,65
		FMH452091	2	9	1,75
		FMH452101	2	10	1,77
		FMH453111	2	11	1,77
		FMH453081	3	8	1,78
		FMH453091	3	9	1,78
		FMH453101	3	10	1,41
		FMH453111	3	11	0,42
		FMH453121	3	12	0,50
		FMH454591	4	9	0,55
		FMH454101	4	10	0,32
		FMH454111	4	11	1,65
		FMH454121	4	12	1,75
		FMH454131	4	13	1,77
		FMH455101	5	10	1,77
		FMH455111	5	11	1,78
		FMH455121	5	12	1,78
		FMH455131	5	13	1,41
		FMH455141	5	14	0,42


		FMH452073	2	7	1,41
		FMH452083	2	8	1,41
		FMH452093	2	9	1,64
		FMH452103	2	10	1,65
		FMH453113	2	11	1,75
		FMH453083	3	8	1,77
		FMH453093	3	9	1,77
		FMH453103	3	10	1,78
		FMH453113	3	11	1,41
		FMH453123	3	12	1,75
		FMH454593	4	9	0,30
		FMH454103	4	10	0,38
		FMH454113	4	11	0,42
		FMH454123	4	12	0,50
		FMH454133	4	13	1,64
		FMH455103	5	10	1,65
		FMH455113	5	11	1,77
		FMH455123	5	12	1,78
		FMH455133	5	13	1,41
		FMH455143	5	14	1,65
		FMH501060	1	6	1,77
		FMH502070	2	7	1,77
		FMH503080	3	8	1,78
		FMH505090	4	9	1,41
		FMH505100	5	10	1,75
		FMH501061	1	6	1,77
		FMH501071	1	7	1,78
		FMH501081	1	8	1,41
		FMH501091	1	9	1,65
		FMH501101	1	10	1,75
		FMH502071	2	7	1,77

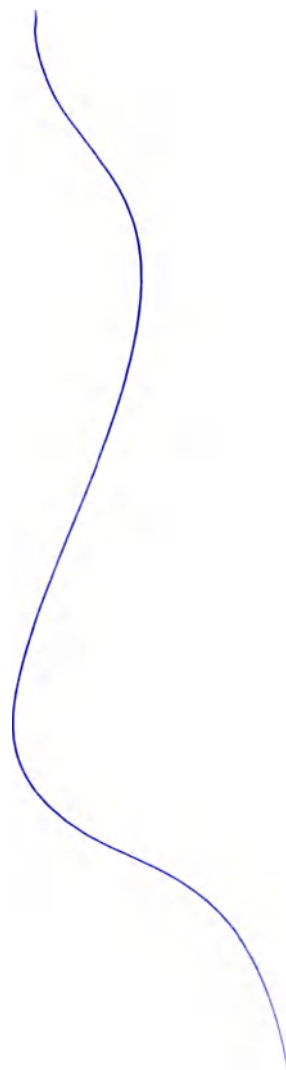

		FMH502091	2	9
		FMH502101	2	10
		FMH503111	2	11
		FMH503081	3	8
		FMH503091	3	9
		FMH503101	3	10
		FMH503111	3	11
		FMH503121	3	12
		FMH505091	4	9
		FMH504101	4	10
		FMH504111	4	11
		FMH504121	4	12
		FMH504131	4	13
		FMH505101	5	10
		FMH505111	5	11
		FMH505121	5	12
		FMH505131	5	13
		FMH505141	5	14
		FMH502073	2	7
		FMH502083	2	8
		FMH502093	2	9
		FMH502103	2	10
		FMH503113	2	11
		FMH503083	3	8
		FMH503093	3	9
		FMH503103	3	10
		FMH503113	3	11
		FMH503123	3	12
		FMH505093	4	9
		FMH504103	4	10

1,65
1,75
1,77
1,77
1,78
1,78
1,41
0,42
0,50
0,55
0,32
1,65
1,64
1,65
1,75
1,76
1,76
1,77
1,65
1,75
1,77
1,77
1,78
1,41
0,32
1,65
1,64
1,65
1,75
1,76

		FMH504113	4	11	0,42
		FMH504123	4	12	0,50
		FMH504133	4	13	0,55
		FMH505103	5	10	0,32
		FMH505113	5	11	1,65
		FMH505123	5	12	1,75
		FMH505133	5	13	0,32
		FMH505143	5	14	1,65
		FMH551060	1	6	1,65
		FMH552070	2	7	1,75
		FMH553080	3	8	1,76
		FMH555590	4	9	1,77
		FMH555100	5	10	1,77
		FMH551061	1	6	1,78
		FMH551071	1	7	1,41
		FMH551081	1	8	0,42
		FMH551091	1	9	0,50
		FMH551101	1	10	0,55
		FMH552071	2	7	0,32
		FMH552081	2	8	1,65
		FMH552091	2	9	1,75
		FMH552101	2	10	1,76
		FMH553111	2	11	1,77
		FMH553081	3	8	1,77
		FMH553091	3	9	1,78
		FMH553101	3	10	1,65
		FMH553111	3	11	1,75
		FMH553121	3	12	1,77
		FMH555591	4	9	1,77
		FMH554101	4	10	1,75
		FMH554111	4	11	1,77

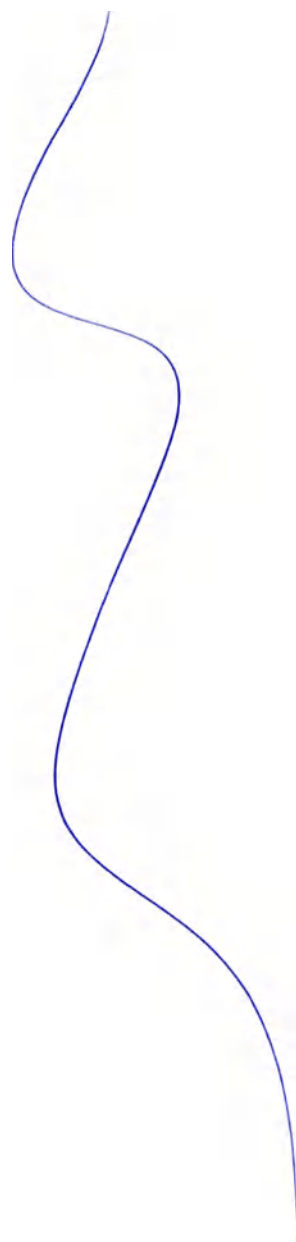

		FMH554121	4	12	1,78
		FMH554131	4	13	1,41
		FMH555593	5	10	0,42
		FMH555101	5	11	0,50
		FMH555111	5	12	0,55
		FMH555121	5	13	0,32
		FMH555131	5	14	1,65
		FMH555141	2	7	1,75
		FMH552073	2	8	1,76
		FMH552083	2	9	1,77
		FMH552093	2	10	1,77
		FMH552103	2	11	1,78
		FMH553113	3	8	1,78
		FMH553083	3	9	1,41
		FMH553093	3	10	0,42
		FMH553103	3	11	0,50
		FMH553113	3	12	0,55
		FMH553123	4	9	0,32
		FMH554103	4	10	1,65
		FMH554113	4	11	1,75
		FMH554123	4	12	1,76
		FMH554133	4	13	1,77
		FMH555103	5	10	1,77
		FMH555113	5	11	1,78
		FMH555123	5	12	1,65
		FMH555133	5	13	1,75
		FMH555143	5	14	1,77
		FMH601060	1	6	1,77
		FMH602070	2	7	1,75
		FMH603080	3	8	1,78
		FMH606090	4	9	1,41

		FMH605100	5	10	1,78
		FMH601061	1	6	1,41
		FMH601071	1	7	0,42
		FMH601081	1	8	0,50
		FMH601091	1	9	0,55
		FMH601101	1	10	1,78
		FMH602071	2	7	1,78
		FMH602081	2	8	1,41
		FMH602091	2	9	0,42
		FMH602101	2	10	0,50
		FMH603111	2	11	0,55
		FMH603081	3	8	0,55
		FMH603091	3	9	0,32
		FMH603101	3	10	1,78
		FMH603111	3	11	1,41
		FMH603121	3	12	0,42
		FMH606091	4	9	0,50
		FMH604101	4	10	0,55
		FMH604111	4	11	0,42
		FMH604121	4	12	0,50
		FMH604131	4	13	0,55
		FMH605101	5	10	0,32
		FMH605111	5	11	1,65
		FMH605121	5	12	1,75
		FMH605131	5	13	0,42
		FMH605141	5	14	1,75
		FMH602073	2	7	0,42
		FMH602083	2	8	0,50
		FMH602093	2	9	0,55
		FMH602103	2	10	0,32
		FMH603113	2	11	1,65

		FMH603093	3	9	1,75
		FMH603103	3	10	0,42
		FMH603113	3	11	0,50
		FMH603123	3	12	0,55
		FMH606093	4	9	0,32
		FMH604103	4	10	1,65
		FMH604113	4	11	1,75
		FMH604123	4	12	0,50
		FMH604133	4	13	0,44
		FMH605103	5	10	0,44
		FMH605113	5	11	0,57
		FMH605123	5	12	0,69
		FMH605133	5	13	0,81
		FMH605143	5	14	0,93
					1,31

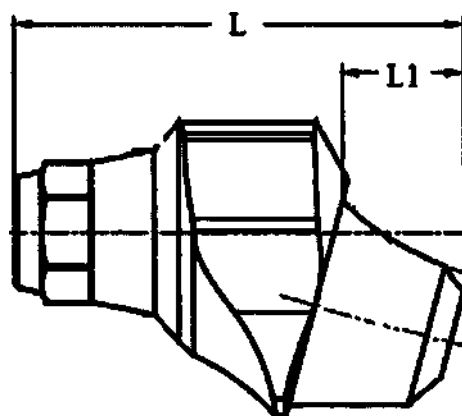
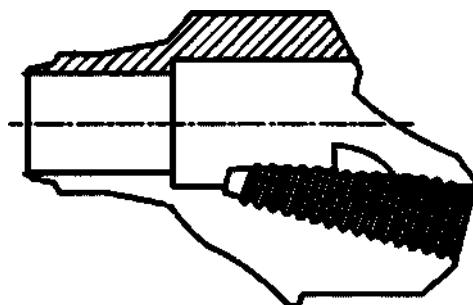


Рис. 10 Абатмент мультинонит
 Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
 Допустимое отклонение=±0.05мм
 Внутренняя резьба: диаметр=1.4±0.05 мм, шаг=0.3±0.05 мм, метрическая

		(код заказа)	манжеты L1, мм (±1%)	мм (±1%)	
	Абатмент мультньюнит	FMN351060	1	6	1,78
		FMN352070	2	7	1,41
		FMN353080	3	8	0,42
		FMN354090	4	9	0,50
		FMN355100	5	10	0,55
		FMN351061	1	6	0,42
		FMN351071	1	7	0,50
		FMN351081	1	8	0,55
		FMN351091	1	9	0,32
		FMN351101	1	10	1,65
		FMN352071	2	7	1,65
		FMN352081	2	8	1,75

		FMN352091	2	9	0,42
		FMN352101	2	10	0,50
		FMN353111	2	11	0,55
		FMN353081	3	8	0,42
		FMN353091	3	9	0,50
		FMN353101	3	10	0,55
		FMN353111	3	11	0,32
		FMN353121	3	12	1,65
		FMN354091	4	9	1,75
		FMN354101	4	10	0,42
		FMN354111	4	11	0,50
		FMN354121	4	12	0,55
		FMN354131	4	13	0,32
		FMN355101	5	10	1,65
		FMN355111	5	11	1,75
		FMN355121	5	12	0,50
		FMN355131	5	13	0,55
		FMN355141	5	14	0,32
		FMN352073	2	7	0,55
		FMN352083	2	8	0,32
		FMN352093	2	9	1,65
		FMN352103	2	10	1,75
		FMN352103	2	11	0,42
		FMN353083	3	8	0,50
		FMN353093	3	9	0,55
		FMN353103	3	10	0,32
		FMN353113	3	11	1,65
		FMN353123	3	12	1,75
		FMN354093	4	9	0,42
		FMN354103	4	10	0,50
		FMN354113	4	11	0,55
		FMN354123	4	12	1,78

		FMN355103	5	10	0,42
		FMN355113	5	11	0,50
		FMN355123	5	12	0,55
		FMN355133	5	13	0,55
		FMN355143	5	14	0,32
		FMN401060	1	6	1,65
		FMN402070	2	7	0,32
		FMN403080	3	8	1,65
		FMN404090	4	9	1,75
		FMN405100	5	10	0,42
		FMN401061	1	6	1,78
		FMN401071	1	7	1,41
		FMN401081	1	8	0,42
		FMN401091	1	9	0,50
		FMN401101	1	10	0,55
		FMN402071	2	7	0,42
		FMN402081	2	8	0,50
		FMN402091	2	9	0,55
		FMN402101	2	10	0,32
		FMN403111	2	11	1,65
		FMN403081	3	8	1,75
		FMN403091	3	9	0,42
		FMN403101	3	10	0,50
		FMN403111	3	11	0,55
		FMN403121	3	12	0,42
		FMN404091	4	9	0,50
		FMN404101	4	10	0,55
		FMN404111	4	11	0,32
		FMN404121	4	12	1,65
		FMN404131	4	13	1,65
		FMN405101	5	10	1,75


		FMN405111	5	12	1,77
		FMN405121	5	13	1,78
		FMN405131	5	14	1,78
		FMN405141	5	14	1,78
		FMN402073	2	7	1,78
		FMN402083	2	8	1,41
		FMN402093	2	9	0,42
		FMN402103	2	10	0,50
		FMN403113	2	11	0,55
		FMN403083	3	8	1,78
		FMN403093	3	9	1,41
		FMN403103	3	10	0,42
		FMN403113	3	11	0,50
		FMN403123	3	12	0,55
		FMN404093	4	9	0,32
		FMN404103	4	10	1,65
		FMN404113	4	11	1,41
		FMN404123	4	12	0,42
		FMN404133	4	13	1,78
		FMN405103	5	10	1,41
		FMN405113	5	11	0,42
		FMN405123	5	12	0,50
		FMN405133	5	13	0,55
		FMN405143	5	14	0,32
		FMN451060	1	6	1,65
		FMN452070	2	7	1,41
		FMN453080	3	8	0,42
		FMN454590	4	9	0,50
		FMN455100	5	10	0,55
		FMN451061	1	6	1,78
		FMN451071	1	7	1,78

		FMN451081	1	8	1,78
		FMN451091	1	9	1,41
		FMN451101	1	10	0,42
		FMN452071	2	7	0,50
		FMN452081	2	8	0,55
		FMN452091	2	9	1,78
		FMN452101	2	10	1,41
		FMN453111	2	11	0,42
		FMN453081	3	8	0,50
		FMN453091	3	9	0,55
		FMN453101	3	10	0,32
		FMN453111	3	11	1,65
		FMN453121	3	12	1,41
		FMN454591	4	9	0,42
		FMN454101	4	10	1,78
		FMN454111	4	11	1,41
		FMN454121	4	12	0,42
		FMN454131	4	13	0,50
		FMN455101	5	10	0,55
		FMN455111	5	11	0,32
		FMN455121	5	12	1,65
		FMN455131	5	13	1,65
		FMN455141	5	14	1,41
		FMN452073	2	7	0,50
		FMN452083	2	8	0,55
		FMN452093	2	9	1,78
		FMN452103	2	10	1,78
		FMN453113	2	11	1,41
		FMN453083	3	8	0,42
		FMN453093	3	9	0,50
		FMN453103	3	10	0,55



		FMN453113	3	11	1,41
		FMN453123	3	12	0,42
		FMN454593	4	9	0,50
		FMN454103	4	10	0,55
		FMN454113	4	11	1,78
		FMN454123	4	12	1,41
		FMN454133	4	13	0,42
		FMN455103	5	10	0,50
		FMN455113	5	11	0,55
		FMN455123	5	12	0,32
		FMN455133	5	13	1,65
		FMN455143	5	14	1,41
		FMN501060	1	6	0,42
		FMN502070	2	7	0,50
		FMN503080	3	8	0,55
		FMN505090	4	9	1,78
		FMN505100	5	10	1,78
		FMN501061	1	6	1,78
		FMN501071	1	7	1,78
		FMN501081	1	8	1,41
		FMN501091	1	9	0,42
		FMN501101	1	10	0,50
		FMN502071	2	7	0,55
		FMN502081	2	8	1,41
		FMN502091	2	9	1,78
		FMN502101	2	10	1,41
		FMN503111	2	11	0,42
		FMN503081	3	8	0,50
		FMN503091	3	9	0,55
		FMN503101	3	10	1,78
		FMN503111	3	11	1,78

	FMN503121	3	12	1,41
	FMN505091	4	9	0,42
	FMN504101	4	10	0,50
	FMN504111	4	11	1,41
	FMN504121	4	12	1,78
	FMN504131	4	13	1,41
	FMN505101	5	10	0,42
	FMN505111	5	11	0,50
	FMN505121	5	12	0,50
	FMN505131	5	13	0,55
	FMN505141	5	14	0,32
	FMN502073	2	7	1,65
	FMN502083	2	8	1,75
	FMN502093	2	9	1,77
	FMN502103	2	10	1,77
	FMN503113	2	11	1,78
	FMN503083	3	8	1,78
	FMN503093	3	9	1,41
	FMN503103	3	10	0,42
	FMN503113	3	11	0,50
	FMN503123	3	12	0,55
	FMN505093	4	9	0,42
	FMN504103	4	10	0,50
	FMN504113	4	11	0,55
	FMN504123	4	12	0,32
	FMN504133	4	13	1,65
	FMN505103	5	10	1,75
	FMN505113	5	11	1,77
	FMN505123	5	12	1,77
	FMN505133	5	13	1,78
	FMN505143	5	14	1,41

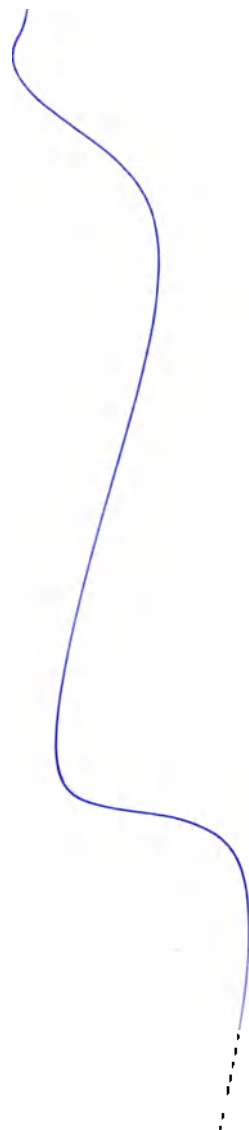

		FMN551060	1	6	0,30
		FMN552070	2	7	0,38
		FMN553080	3	8	0,42
		FMN555590	4	9	0,50
		FMN555100	5	10	0,55
		FMN551061	1	6	0,32
		FMN551071	1	7	1,65
		FMN551081	1	8	1,75
		FMN551091	1	9	1,77
		FMN551101	1	10	1,77
		FMN552071	2	7	1,78
		FMN552081	2	8	1,78
		FMN552091	2	9	1,41
		FMN552101	2	10	0,42
		FMN553111	2	11	0,50
		FMN553081	3	8	0,55
		FMN553091	3	9	0,32
		FMN553101	3	10	1,65
		FMN553111	3	11	1,75
		FMN553121	3	12	1,77
		FMN555591	4	9	1,77
		FMN554101	4	10	1,78
		FMN554111	4	11	1,78
		FMN554121	4	12	1,41
		FMN554131	4	13	0,42
		FMN555101	5	10	0,50
		FMN555111	5	11	1,78
		FMN555121	5	12	1,41
		FMN555131	5	13	0,42
		FMN555141	5	14	1,78
		FMN552073	2	7	1,41

		FMN552083	2	8	1,64
		FMN552093	2	9	1,65
		FMN552103	2	10	1,75
		FMN553113	2	11	1,77
		FMN553083	3	8	1,77
		FMN553093	3	9	1,78
		FMN553103	3	10	1,41
		FMN553113	3	11	1,65
		FMN553123	3	12	1,75
		FMN555593	4	9	1,77
		FMN554103	4	10	1,77
		FMN554113	4	11	1,78
		FMN554123	4	12	1,78
		FMN554133	4	13	1,41
		FMN555103	5	10	0,65
		FMN555113	5	11	1,75
		FMN555123	5	12	1,75
		FMN555133	5	13	1,77
		FMN555143	5	14	1,78
		FMN601060	1	6	1,41
		FMN602070	2	7	1,75
		FMN603080	3	8	1,75
		FMN606090	4	9	1,64
		FMN605100	5	10	1,65
		FMN601061	1	6	1,75
		FMN601071	1	7	1,75
		FMN601081	1	8	0,65
		FMN601091	1	9	0,66
		FMN601101	1	10	0,66
		FMN602071	2	7	1,78
		FMN602081	2	8	1,41



					1,09
		FMN602101	2	10	1,65
		FMN603111	2	11	1,75
		FMN603081	3	8	1,75
		FMN603091	3	9	1,64
		FMN603101	3	10	1,65
		FMN603111	3	11	1,75
		FMN603121	3	12	1,75
		FMN606091	4	9	1,75
		FMN604101	4	10	1,77
		FMN604111	4	11	1,77
		FMN604121	4	12	1,77
		FMN604131	4	13	0,48
		FMN605101	5	10	0,55
		FMN605111	5	11	0,65
		FMN605121	5	12	0,66
		FMN605131	5	13	0,66
		FMN605141	5	14	0,67
		FMN602073	2	7	1,65
		FMN602083	2	8	1,75
		FMN602093	2	9	1,75
		FMN602103	2	10	1,75
		FMN603113	2	11	1,77
		FMN603083	3	8	1,77
		FMN603093	3	9	1,78
		FMN603103	3	10	1,41
		FMN603113	3	11	1,41
		FMN603123	3	12	1,64
		FMN606093	4	9	1,65
		FMN604103	4	10	1,75
		FMN604113	4	11	1,75



	FMN604123	4	13	1,04
	FMN604133	4	13	1,78
	FMN605103	5	10	1,81
	FMN605113	5	11	1,88
	FMN605123	5	12	1,89
	FMN605133	5	13	1,91
	FMN605143	5	14	1,93

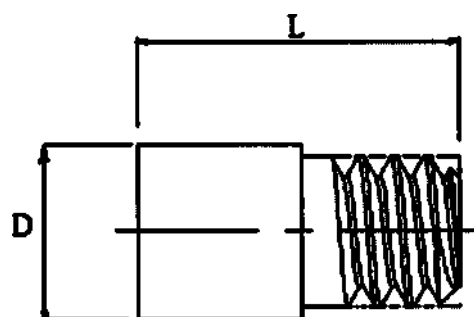


Рис. 11. Винт фиксирующий и колпачок для абатмента мультионит



Допустимое отклонение: менее 6 мм ± 0.05 мм, выше 6 мм ± 0.1 мм

Наружная резьба: наружный диаметр резьбы $= 1.37^{+0}_{-0.01}$ мм, внутренний диаметр $= 1.0^{+0}_{-0.1}$ мм, шаг $= 0.3 \pm 0.05$ мм, угол резьбы $= 60^\circ \pm 0.05^\circ$, высота профиля $= 0.175 \pm 0.05$ мм, метрическая

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр колпачка/диаметр винта D, мм ($\pm 1\%$)	Высота колпачка/длина винта L, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г (± 0.05 г)
5.	Винт фиксирующий и колпачок для абатмента мультионит	FMRS	2.5	4.4	0,38
		FMC35	3.6	4.3	0,42
		FMC40	4	4.3	0,50
		FMC45	4.5	4.3	0,55
		FMC50	5	4.3	0,32
		FMC55	5.5	4.3	0,47
		FMC60	6	4.3	0,55

D

L

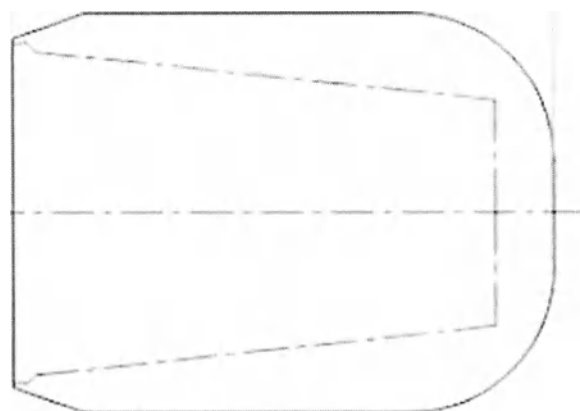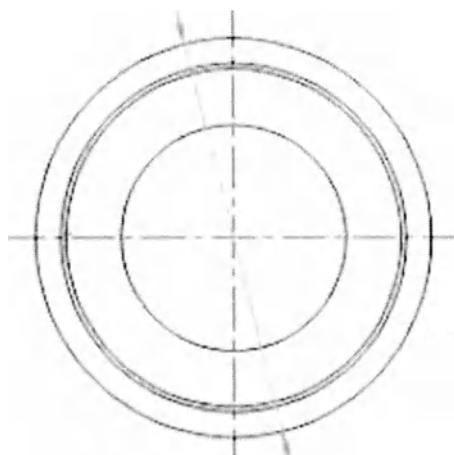

Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение=±0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм (±1%)	Длина L, мм (±1%)	Масса, г (±0.05 г)
6.	Колпачок абатмента Magicore	MA4502C	ø5.5	5.5	0,28
		MA4503C	ø5.5	6.5	0,30
		MA4504C	ø5.5	7.5	0,38
		MA4505C	ø5.5	8.5	0,42
		MA4506C	ø5.5	9.5	0,50
		MA5002C	ø6.0	5.5	0,55
		MA5003C	ø6.0	6.5	0,32
		MA5004C	ø6.0	7.5	0,47
		MA5005C	ø6.0	8.5	0,55
		MA5006C	ø6.0	9.5	0,65
		MA5502C	ø6.5	5.5	0,66
		MA5503C	ø6.5	6.5	0,67
		MA5504C	ø6.5	7.5	0,68
		MA5505C	ø6.5	8.5	0,52
		MA5506C	ø6.5	9.5	0,59
		MA6002C	ø7.0	5.5	0,35
		MA6003C	ø7.0	6.5	0,45
		MA6004C	ø7.0	7.5	0,55
		MA6005C	ø7.0	8.5	0,65
		MA6006C	ø7.0	9.5	0,76

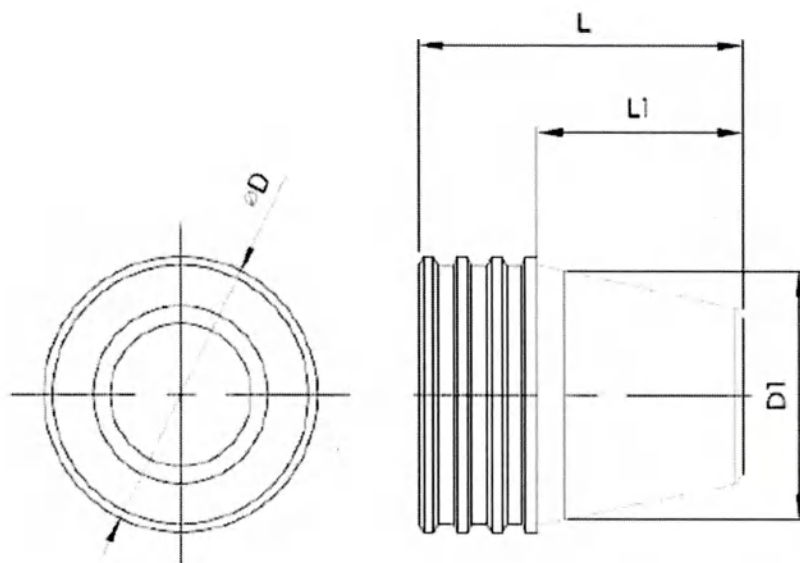


Рис. 13. Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) – винт основного типа не гексагональный
Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение=±0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Длина L, мм (±1%)	Длина L1, мм (±1%)	Масса, г (±0.05 г)
7.	Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) – винт основного типа не	MPSRM45B	3.2	2.89	3.8	2.4	1,31
		MPSRM50B	4	3.28	3.8	2.4	1,40
		MPSRM55B	4	3.28	3.8	2.4	1,41
	гексагональный	MPSRM60B	4.4	3.28	3.8	2.4	1,64

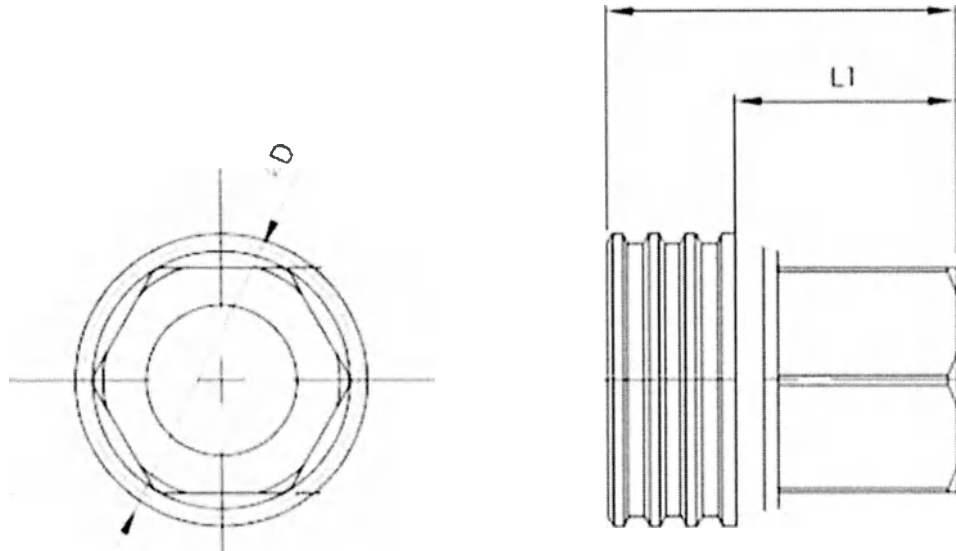


Рис. 14. Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) – винт основного типа гексагональный
Шероховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение=±0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм (±1%)	Длина L, мм (±1%)	Длина L1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
8.	Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) – винт основного типа гексагональный	MPSRM45S	3.2	3.8	2.4	1,41
		MPSRM50S	4	3.8	2.4	1,64
		MPSRM55S	4	3.8	2.4	1,65
		MPSRM60S	4.4	3.8	2.4	1,75

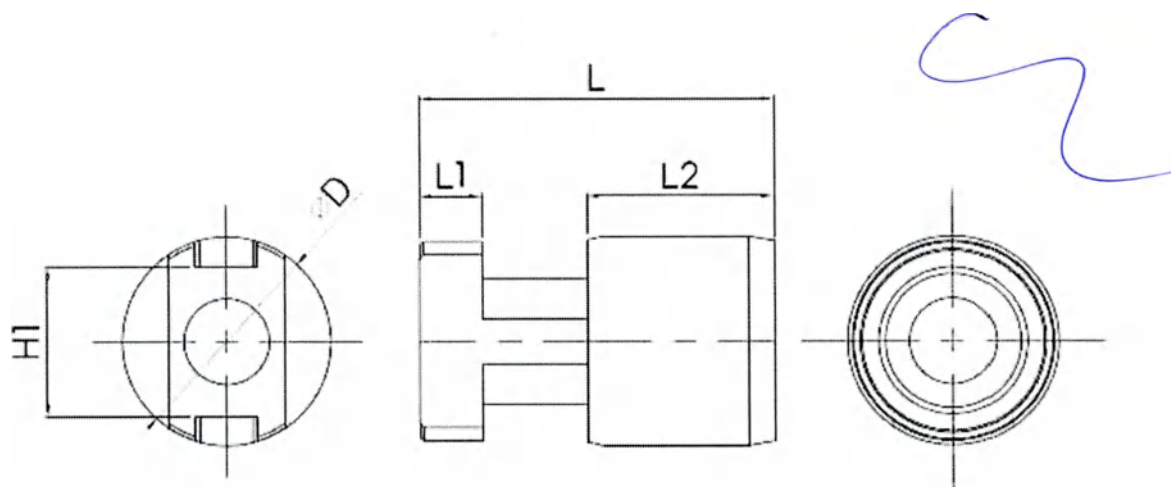


Рис. 15. Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией)
- колпачок
Шероховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение=±0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм (±1%)	Главная часть H1, мм (±1%)	Длина L, мм (±1%)	Длина L1, мм (±1%)	Длина L2, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
9.	Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) – колпачок	MPBOC45	5	3.6	8.5	1.5	4.5	1,78
		MPBOC50	6	4.1	8.5	1.5	4.5	1,81
		MPBOC55	6	4.6	8.5	1.5	4.5	1,84
		MPBOC60	6.4	5	8.5	1.5	4.5	1,78

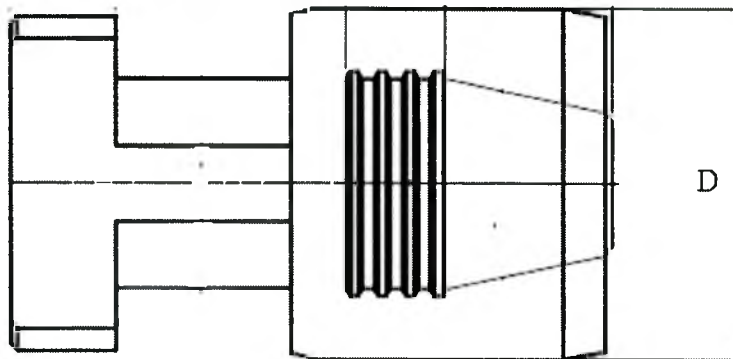


Рис. 16. Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) в наборе (колпачок и винт)
Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение ± 0.05
Длина колпачка = 8.5 ± 0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр колпачка D, мм ($\pm 1\%$)	Тип	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
10.	Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) в наборе (колпачок и винт)	MPSR45B	4.5	Не гексагональный	0,45
		MPSR50B	5.0		0,55
		MPSR55B	5.5		0,65
		MPSR60B	6.0		0,76
		MPSR45S	4.5	Гексагональный	0,44
		MPSR50S	5.0		0,57
		MPSR55S	5.5		0,69
		MPSR60S	6.0		0,81

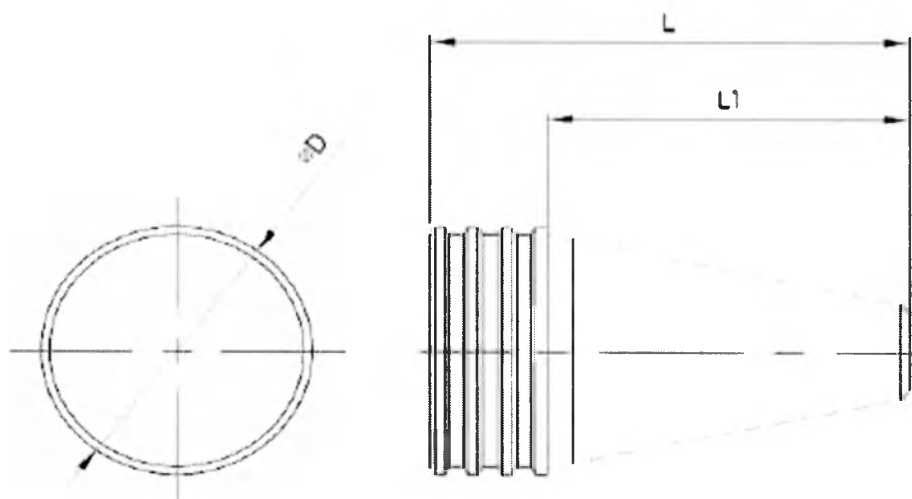


Рис. 17. Колпачок выжигаемый (с фиксацией на цемент) – колпачок (основной тип, не гексагональный)
Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение ± 0.05 мм



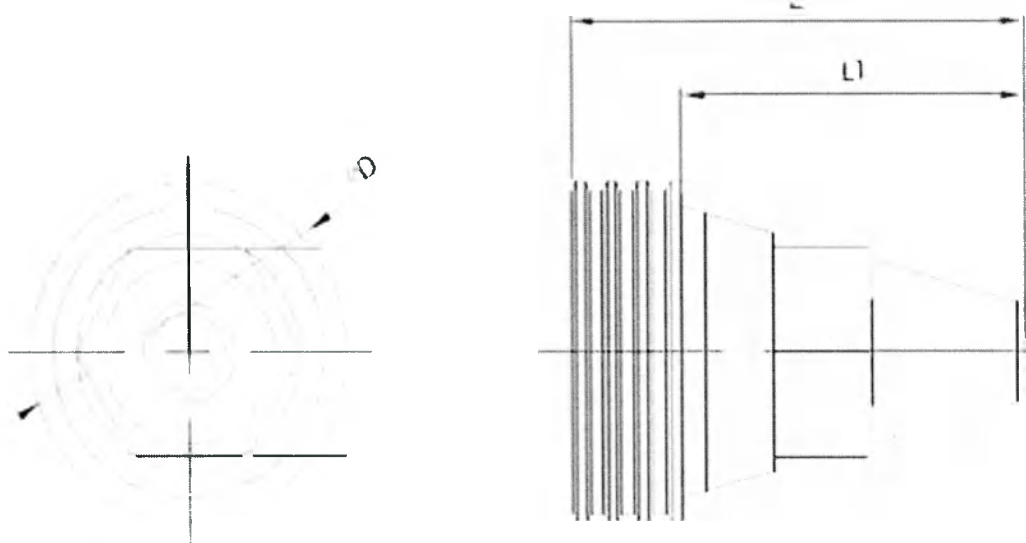


Рис. 18. Колпачок выжигаемый (с фиксацией на цемент) – колпачок (основной тип, гексагональный)
Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение ± 0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Длина L, мм ($\pm 1\%$)	Длина L1, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
11.	Колпачок выжигаемый (с фиксацией на цемент) – колпачок (основной тип, не гексагональный)	MPCM45B	3.2	5.7	4.3	1,31
		MPCM50B	4	5.7	4.3	1,40
		MPCM55B	4	5.7	4.3	1,41
		MPCM60B	4.4	5.7	4.3	1,41
12.	Колпачок выжигаемый (с фиксацией на цемент) – колпачок (основной тип, гексагональный)	MPCM45S	3.2	5.7	4.3	1,64
		MPCM50S	4	5.7	4.3	1,65
		MPCM55S	4	5.7	4.3	1,75
		MPCM60S	4.4	5.7	4.3	1,77

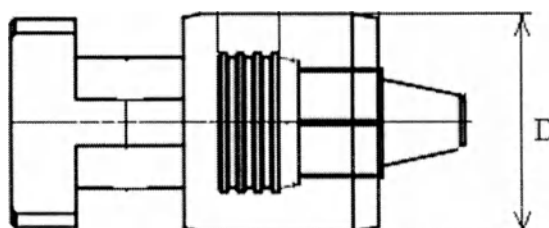


Рис. 19. Колпачок выжигаемый (с фиксацией на цемент)
Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение ± 0.05 мм
Длина колпачка = 8.5 ± 0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр колпачка D, мм ($\pm 1\%$)	Тип	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
13.	Колпачок выжигаемый (с фиксацией на	MPLP45S	4.5	Гексагональный	1,78
		MPLP55S	5.5		1,81
		MPLP45B	4.5		1,84

	MPLP50B	5.0	1,83
	MPLP60B	6.0	1,86

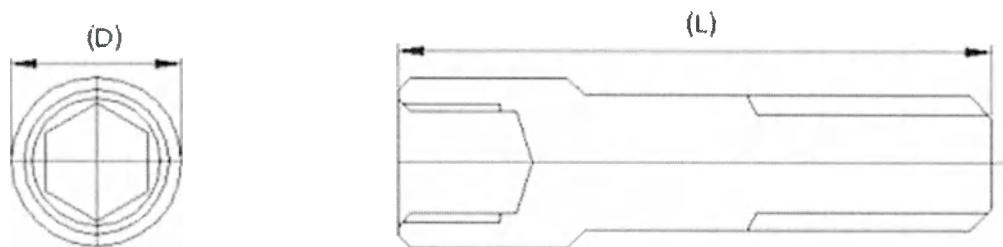


Рис. 20. Колпачок выжигаемый винтовой
Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение ± 0.05 мм
Наружная резьба: диаметр $= 1.6 \pm 0.05$ мм, шаг $= 0.35 \pm 0.05$ мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Длина L, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
14.	Колпачок выжигаемый винтовой	MPCS	7	3	1,31

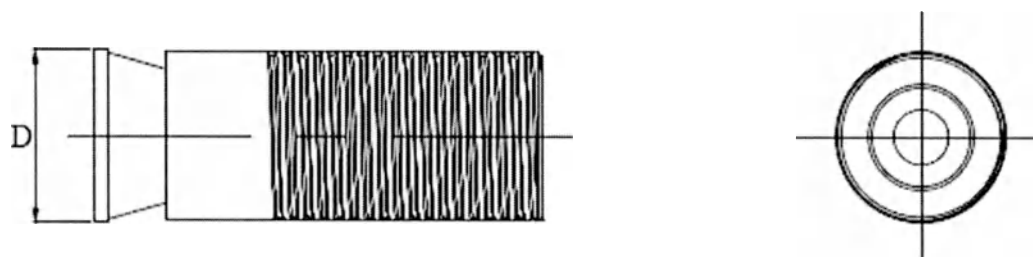


Рис. 21. Цилиндр ССМ
Допустимое отклонение: менее 6 мм ± 0.05 мм, выше 6 мм ± 0.1 мм
Наружная резьба: шаг $= 0.3 \pm 0.05$ мм, высота профиля $= 0.15 \pm 0.05$ мм
Длина цилиндра $= 11.9 \pm 0.01$ мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр цилиндра D, мм ($\pm 1\%$)	Тип	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
15.	Цилиндр ССМ	ССН35	3.6	Гексагональный	0,93
		CCN35		Не гексагональный	0,93
		ССН40	4	Гексагональный	1,31
		CCN40		Не гексагональный	1,31
		ССН45	4.5	Гексагональный	1,41
		CCN45		Не гексагональный	1,41
		ССН50	5	Гексагональный	1,64
		CCN50		Не гексагональный	1,64
		ССН55	5.5	Гексагональный	1,75
		CCN55		Не гексагональный	1,75
		ССН60	6	Гексагональный	1,78
		CCN60		Не гексагональный	1,78

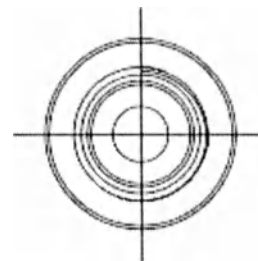
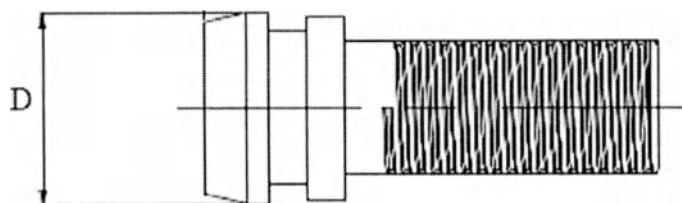


Рис. 22. Цилиндр временный
Допустимое отклонение: менее 6 мм ± 0.05 мм, выше 6 мм ± 0.1 мм
Наружная резьба: шаг $= 0.3 \pm 0.05$ мм, высота профиля $= 0.15 \pm 0.05$ мм
Длина цилиндра $= 12 \pm 0.01$ мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр цилиндра D, мм ($\pm 1\%$)	Тип	Масса, г (± 0.05 г)
16.	Цилиндр временный	TCH35	3.6	Гексагональный	0,88
		TCN35		Не гексагональный	0,88
		TCH40	4	Гексагональный	1,02
		TCN40		Не гексагональный	1,02
		TCH45	4.5	Гексагональный	1,10
		TCN45		Не гексагональный	1,10
		TCH50	5	Гексагональный	1,12
		TCN50		Не гексагональный	1,12
		TCH55	5.5	Гексагональный	1,20
		TCN55		Не гексагональный	1,20
		TCH60	6	Гексагональный	1,22
		TCN60		Не гексагональный	1,22


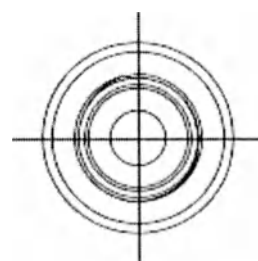


Рис. 23. Цилиндр пластиковый
Допустимое отклонение: менее 6 мм ± 0.05 мм, выше 6 мм ± 0.1 мм
Наружная резьба: шаг $= 0.3 \pm 0.05$ мм, высота профиля $= 0.15 \pm 0.05$ мм
Длина цилиндра $= 12 \pm 0.01$ мм

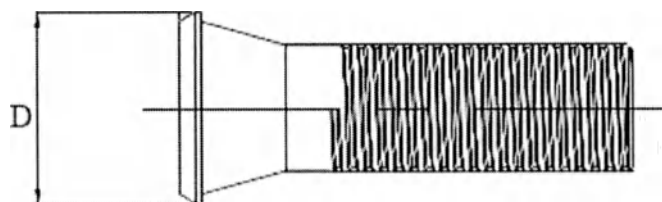

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр цилиндра D, мм ($\pm 1\%$)	Тип	Масса, г (± 0.05 г)
17.	Цилиндр пластиковый	PCH35	3.6	Гексагональный	0,35
		PCN35		Не гексагональный	0,45
		PCH40	4	Гексагональный	0,55
		PCN40		Не гексагональный	0,65
		PCH45	4.5	Гексагональный	0,76

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм (±1%)	Тип	Масса, г (±0,05 г)
		PCN45	5	Не гексагональный	0,81
		PCH50		Гексагональный	0,93
		PCN50		Не гексагональный	1,31
		PCH55	5,5	Гексагональный	1,40
		PCN55		Не гексагональный	1,41
		PCH60	6	Гексагональный	1,64
		PCN60		Не гексагональный	1,68

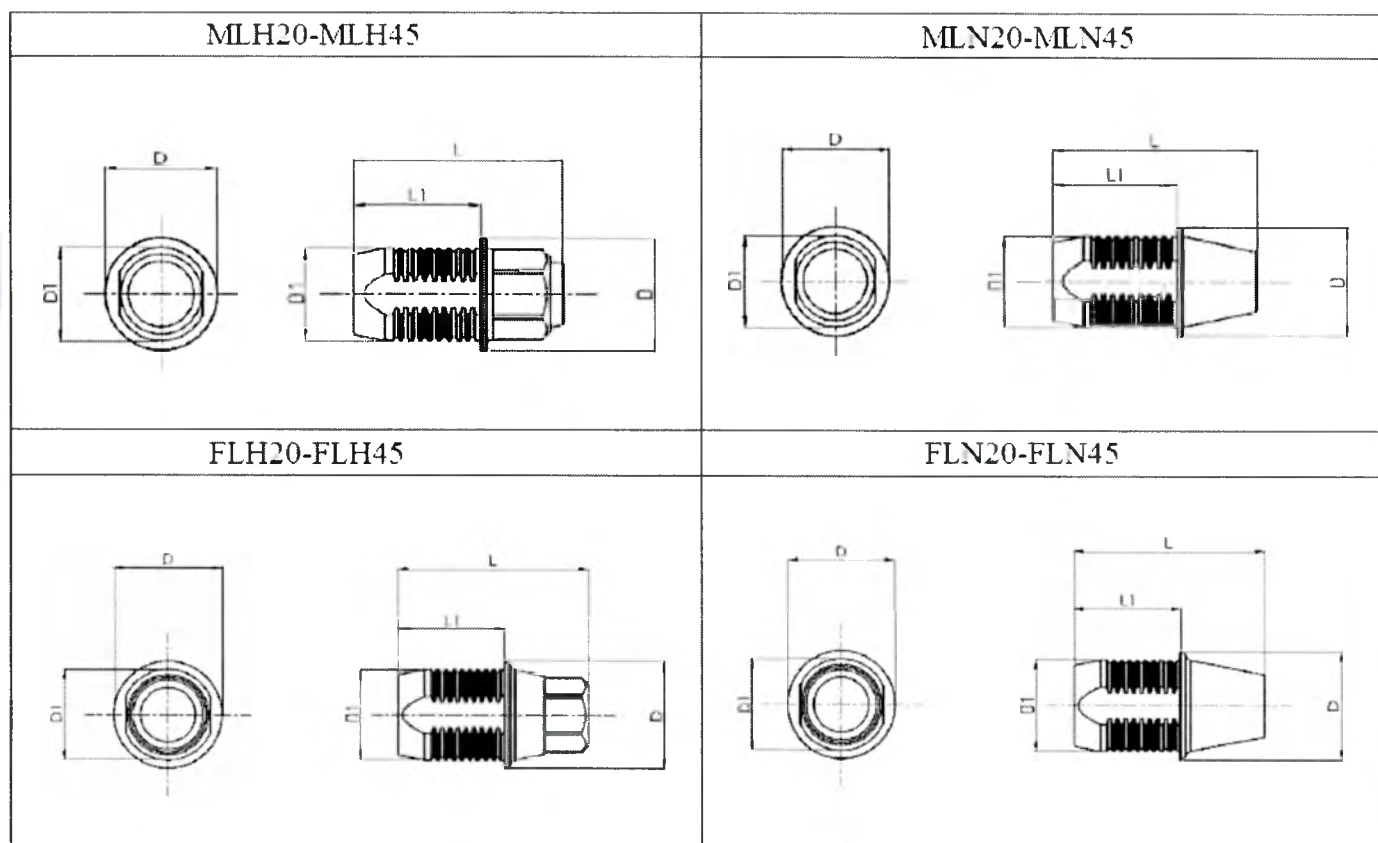


Рис. 24. Цилиндр соединительный

Допустимое отклонение: менее 6 мм $\pm 0,05$ мм, выше 6 мм $\pm 0,1$ мм

Наружная резьба: наружный диаметр $= 2,9 \pm 0,05$ мм, шаг $= 0,3 \pm 0,05$ мм, высота профиля $= 0,15 \pm 0,05$ мм, угол резьбы $= 60^\circ \pm 0,05^\circ$, метрическая

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Длина L, мм (±1%)	Длина L1, мм (±1%)	Тип	Масса, г (±0,05 г)
18.	Цилиндр соединительный	MLH20	3,5	2,9	4,6	2	Гексагональный	0,88
		MLH30			5,6	3		0,88
		MLH40			6,6	4		1,02
		MLH25	4,3	3,6	4,6	2		1,02
		MLH35			5,6	3		1,10
		MLH45			6,6	4		1,10
		MLN20	3,5	2,9	4,6	2	Не гексагональный	1,12
		MLN30			5,6	3		1,12
		MLN40			6,6	4		1,20
		MLN25	4,3	3,6	4,6	2		1,20

		MLN35			5.6	3		1,22
		MLN45			6.6	4		1,22
		FLH20	4	3.4	5.15	2	Гексагональ ный	0,90
		FLH30			6.15	3		0,90
		FLH40			7.15	4		1,30
		FLH25	4.5	3.6	5.15	2		1,30
		FLH35			6.15	3		1,35
		FLH45			7.15	4		1,35
		FLN20	4	3.40	5.15	2	Не гексагональн ый	0,90
		FLN30			6.15	3		0,90
		FLN40			7.15	4		1,30
		FLN25	4.5	3.6	5.15	2		1,30
		FLN35			6.15	3		1,35
		FLN45			7.15	4		1,35

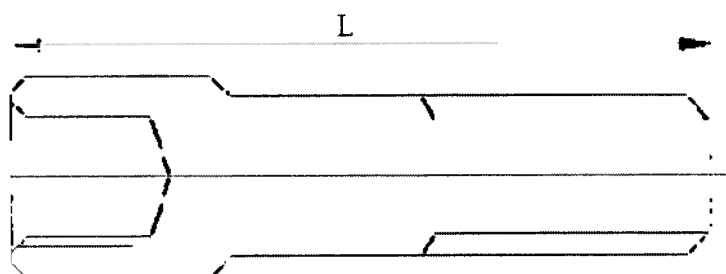
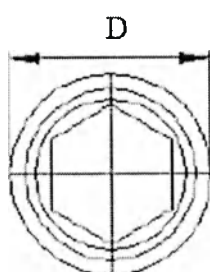


Рис. 25. Винт
Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение ± 0.05 мм
Наружная резьба: диаметр $=1.6 \pm 0.05$ мм, шаг $=0.35 \pm 0.05$ мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Длина L, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
19.	Винт	MPCS	7	2	1,31

Наименование изделия (имплантаты)	Материал, из которого состоит изделие
Имплантаты дентальные IBS Magicore (cutting edge) Имплантаты дентальные IBS Magicore Имплантаты дентальные IBS NR Fix Имплантаты дентальные IBS Magic FC Имплантаты дентальные IBS Magic FC (Cutting edge)	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
Абатмент Magicore Абатмент мультиюнит Цилиндр ССМ Цилиндр временный Цилиндр пластиковый Цилиндр соединительный	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
Абатмент UCLA	Co28Cr6Mo (соответствует требованиям стандартов: F75 Standard Specification для литья; UNS R30075)
Абатмент пластиковый UCLA Колпачок абатмента Magicore	Пластик АБС (CYCOLAC EX58F) Полиэтилен с ультравысокой молекулярной массой и готовой формы (соответствует спецификации стандарта F648 Standard Specification) – UHMWPE.
Винт фиксирующий и колпачок для абатмента мультиюнит	Термопластик (PolyOxyMethylene, полиформальдегид, CAS# 9002-81-7) Ti-6Al-4V Eli, ASTM F136
Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) – винт основного типа не гексагональный Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) – винт основного типа гексагональный Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) – колпачок Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) в наборе (колпачок и винт)	Термопластик (PolyOxyMethylene, полиформальдегид, CAS# 9002-81-7) Краситель NYU800 (Black)
Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией)	Термопластик (PolyOxyMethylene, полиформальдегид, CAS# 9002-81-7)
Колпачок выжигаемый (с фиксацией на цемент) – колпачок (основной тип, не гексагональный) Колпачок выжигаемый (с фиксацией на цемент) – колпачок (основной тип, гексагональный) Колпачок выжигаемый (с фиксацией на цемент)	Термопластик (PolyOxyMethylene, полиформальдегид, CAS# 9002-81-7)
Винт	Ti-6Al-4V Eli (титан Gr5)
Упаковка	- Бумага для стерилизации, Arjowiggins Sterisheet 60 gsm - Лоток, Пластик АБС (CYCOLAC EX58F)

Вид контакта с организмом:

Постоянный контакт с внутренней средой организма

Ассортимент изделия:Рекомендуемый крутящий момент для закручивания абатментов в имплантат 50 ± 2 Н·см.Имплантаты с абатментами соответствуют ISO 14801, предел усталости в результате приложения динамической нагрузки под углом 30° , не менее 330 Н при 5×10^6 циклов и изгибающем моменте не менее 900 Н·мм.

Максимальная нагрузка при статической нагрузке не менее 700 Н.

Таблица 1.1 Описание и внешний вид изделия

Наименование	Изображение	Особенности:
Имплантаты дентальные IBS Magicore (cutting edge)		1. Маленький диаметр имплантата, но совместимость с абатментами любого размера. 2. Легкая имплантация – путем вкручивания. 3. Высокая жесткость имплантата. 4. Предотвращение опускания имплантата ниже уровня костной манжеты. 5. Может быть применен для крепления съемных протезов. Данный тип совместим со всеми видами ортопедических компонентов (если для компонента не указано иного).
Имплантаты дентальные IBS Magicore		1. Конструкция совместимая со структурой альвеолярного гребня, разработанная для предотвращения появления микротрещин от чрезмерной нагрузки за счет охватывания большей части губчатой кости из нижней части между шагами резьбы по сравнению с верхней частью кортикальной кости. 2. Конструкция, которая гарантирует начальную стабильность имплантата, независимо от качества кости пациента: коническая форма, исполнения различного диаметра (позволяют специалисту выбрать диаметр на основе состояния кости пациента), большой диаметр резьбы в верхней части. 3. Конструктивное поддержание кости за счет увеличенной площади поверхности: форма и структура выдерживает вертикальное/горизонтальное давление для предотвращения чрезмерной нагрузки на естественную кость, раз между

		верхней и нижней частью имплантата для увеличения функциональной поверхности. 4. Конструкция имплантата предотвращает неправильное расположение (опускание) имплантата во время установки: нет необходимости использовать дополнительное давление во время установки, имплантат устанавливается путем вращения, это достигается за счет конструкции (шаг резьбы и форма имплантата). 5. Снижение риска распространения инфекции. Паз между верхней и нижней частью является барьером для патогенных микроорганизмов – естественной преградой между частью, которая находится внутри кости, и частью, которая контактирует с ортопедическими компонентами. Данный тип принадлежностей совместим со всеми видами ортопедических компонентов (если для компонента не указано иного).
Имплантаты дентальные IBS NR Fix		1. Маленький диаметр имплантата, но совместимость с абатментами любого размера. 2. Легкая имплантация – путем вкручивания. 3. Высокая жесткость имплантата. 4. Предотвращение опускания имплантата ниже уровня костной манжеты. 5. Может применяться только в случае, если ширина кости 4 мм или меньше (для нижней челюсти – измеряется по передней шестерке, для верхней – по боковому резцу). 6. Может быть применен для крепления съемных протезов. Данный тип совместим со всеми видами ортопедических компонентов (если для компонента не указано иного).
Имплантаты дентальные IBS Magic FC		1. Маленький диаметр имплантата, но совместимость с абатментами любого размера. 2. Легкая имплантация – путем вкручивания. 3. Высокая жесткость имплантата. 4. Предотвращение опускания имплантата ниже уровня костной манжеты. 5. Может быть применен для крепления съемных протезов.
Имплантаты дентальные IBS Magic FC (Cutting edge)		1. Маленький диаметр имплантата, но совместимость с абатментами любого размера. 2. Легкая имплантация – путем вкручивания. 3. Высокая жесткость имплантата. 4. Предотвращение опускания имплантата ниже уровня костной манжеты. 5. Может быть применен для крепления съемных протезов.

Таблица 1.2 Описание и внешний вид принадлежностей

Наименование	Изображение	Особенности:
Абатмент Magicore		Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок или мостовидных ортопедических конструкций. Соединяется с имплантатом с помощью внешней резьбы и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации

[Handwritten signature]

Абатмент UCLA		Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок или мостовидных ортопедических конструкций. Соединяется с имплантатом с помощью внешней резьбы и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации
Абатмент пластиковый UCLA		Временная конструкция, предназначенная для формирования ортопедического компонента на имплантате.
Абатмент мультиюнит		Изделие предназначено для изготовления одиночных коронок или мостовидных ортопедических конструкций. Соединяется с имплантатом с помощью внешней резьбы и с ортопедическими конструкциями при помощи цементной фиксации. Абатмент устанавливается на время заживления мягких тканей десны до установки постоянного имплантата.
Винт фиксирующий и колпачок для абатмента мультиюнит		Предназначен для крепления абатмента к имплантату.
Колпачок абатмента Magicore		Предназначен для механической защиты опоры абатмента после установки.
Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) в наборе (колпачок и винт)		Предназначен для механической защиты опоры абатмента после установки.

Колпачок выжигаемый (с фиксацией на цемент)		Предназначен для механической защиты опоры абатмента после установки.
Винт		Предназначен для крепления абатмента.
Цилиндр ССМ		Предназначен для изготовления индивидуальных абатментов.
Цилиндр временный		Предназначен для изготовления индивидуальных абатментов.
Цилиндр пластиковый		Предназначен для изготовления индивидуальных абатментов.
Цилиндр соединительный		Предназначен для изготовления индивидуальных абатментов.

Таблица 1.3 Параметры упаковки для стерилизации

Упаковка для стерилизации	Прочность упаковочного материала в продольном/поперечном направлении: 4 Н/см $\pm$ 0,5 Н/см; ширина клеевого слоя – 11$\pm$1 мм, усилие отрыва/открытия: 2,5$\pm$0,5 Н, боковые швы располагаются на расстоянии – 1$\pm$0,05 мм от края пакета, сварные швы должны быть ровными – без прожженных мест и складок; не допускается наличие на поверхностях упаковочного материала трещин, запрессованных складок, морщин, проколов, надрывов, расслоения материала, загрязнений, а также слипание внутренних поверхностей упаковочного материала
---------------------------	---

Далее, в таблице 2, представлены основные габаритные размеры, определяющие порядок подготовки и установки имплантатов в костную ткань.

Таблица 2. Технические характеристики изделия



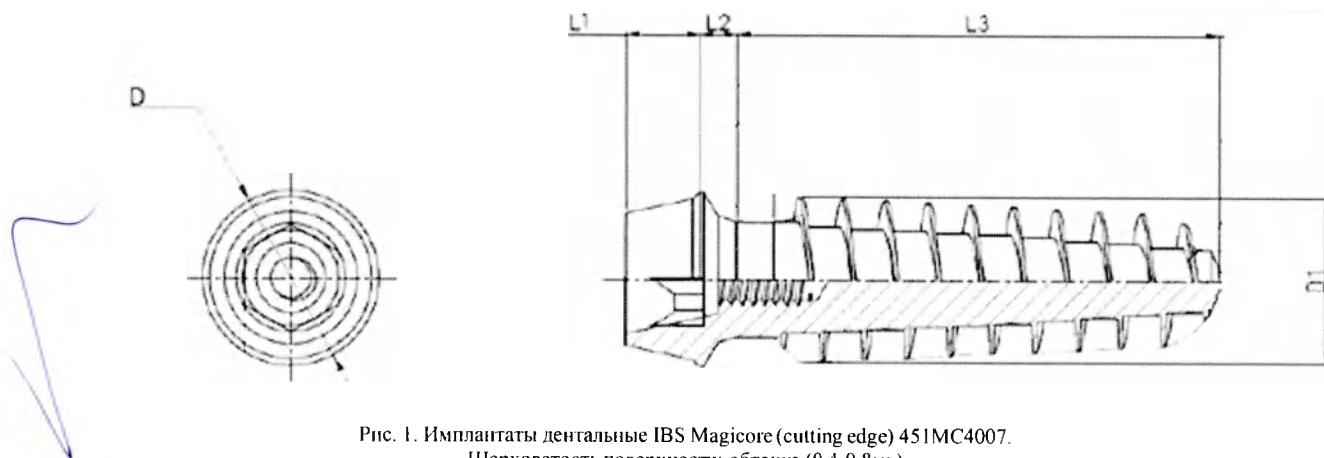


Рис. 1. Имплантаты дентальные IBS Magicore (cutting edge) 451MC4007.

Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)


Допустимое отклонение ± 0.05 мм

Наружная резьба: макс. диаметр 4 ± 0.05 мм, мин. диаметр 3.32 ± 0.05 мм, высота профиля $0.75^{+0.05}_{-0.00}$, шаг 1.15 ± 0.05 мм, угол резьбы $4^\circ \pm 0.05^\circ$, метрическая

Внутренняя резьба: диаметр 1.65 ± 0.05 мм, шаг 0.35 ± 0.05 мм, метрическая

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм ($\pm 1\%$)	Длина (L2), мм ($\pm 1\%$)	Длина имплантации (L3), мм ($\pm 1\%$)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр D1, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г (± 0.05 г)
1.	Имплантаты дентальные IBS Magicore (cutting edge)	451MC4007	2	1	7	4.7	4	0,26
		452MC4007	2	2	7	4.7	4	0,28
		453MC4007	2	3	7	4.7	4	0,36
		454MC4007	2	4	7	4.7	4	0,44
		455MC4007	2	5	7	4.7	4	0,52
		456MC4007	2	6	7	4.7	4	0,59
		457MC4007	2	7	7	4.7	4	0,35
		458MC4007	2	8	7	4.7	4	0,45
		459MC4007	2	9	7	4.7	4	0,55
		4510MC4007	2	10	7	4.7	4	0,65
		451MC4009	2	1	9	4.7	4	0,76
		452MC4009	2	2	9	4.7	4	0,44
		453MC4009	2	3	9	4.7	4	0,57
		454MC4009	2	4	9	4.7	4	0,69
		455MC4009	2	5	9	4.7	4	0,81
		456MC4009	2	6	9	4.7	4	0,93
		457MC4009	2	7	9	4.7	4	1,31
		458MC4009	2	8	9	4.7	4	1,31
		459MC4009	2	9	9	4.7	4	1,40
		4510MC4009	2	10	9	4.7	4	1,41
		451MC4011	2	1	11	4.7	4	1,41
		452MC4011	2	2	11	4.7	4	1,64
		453MC4011	2	3	11	4.7	4	1,65
		454MC4011	2	4	11	4.7	4	1,75

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		455MC4011	2	5	11	4,7	4	1,75
		456MC4011	2	6	11	4,7	4	1,75
		457MC4011	2	7	11	4,7	4	1,77
		458MC4011	2	8	11	4,7	4	1,77
		459MC4011	2	9	11	4,7	4	1,78
		4510MC4011	2	10	11	4,7	4	1,81
		451MC4013	2	1	13	4,7	4	1,84
		452MC4013	2	2	13	4,7	4	0,28
		453MC4013	2	3	13	4,7	4	0,36
		454MC4013	2	4	13	4,7	4	0,44

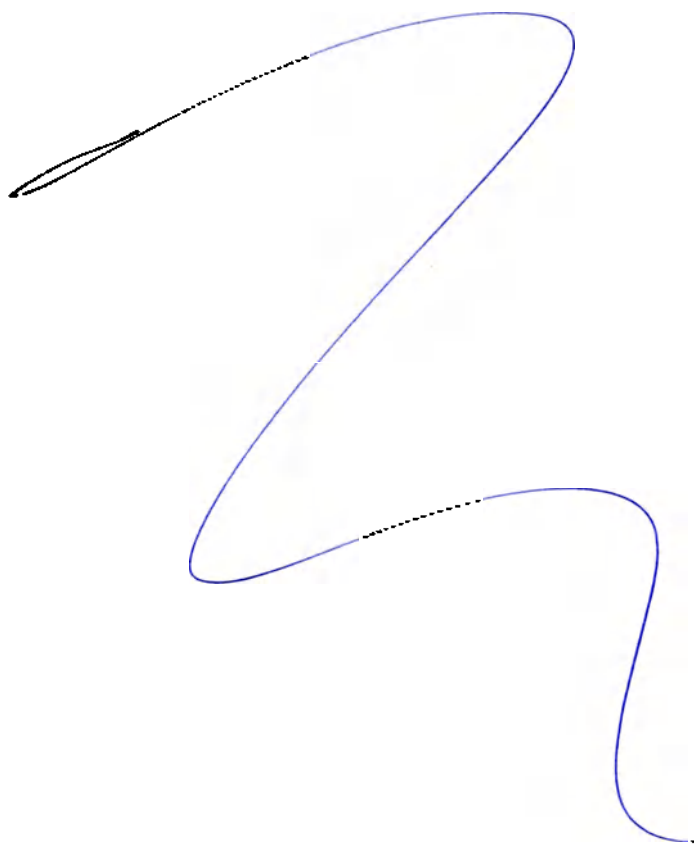

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		455MC4013	2	5	13	4.7	4	0,52
		456MC4013	2	6	13	4.7	4	0,59
		457MC4013	2	7	13	4.7	4	0,35
		458MC4013	2	8	13	4.7	4	0,45
		459MC4013	2	9	13	4.7	4	0,55
		4510MC4013	2	10	13	4.7	4	0,65
		451MC4507	2	1	7	4.7	4.5	0,76
		452MC4507	2	2	7	4.7	4.5	0,44
		453MC4507	2	3	7	4.7	4.5	0,57
		454MC4507	2	4	7	4.7	4.5	0,69
		455MC4507	2	5	7	4.7	4.5	0,81
		456MC4507	2	6	7	4.7	4.5	0,93
		457MC4507	2	7	7	4.7	4.5	1,31
		458MC4507	2	8	7	4.7	4.5	1,31
		459MC4507	2	9	7	4.7	4.5	1,40
		4510MC4507	2	10	7	4.7	4.5	1,41
		451MC4509	2	8	7	4.7	4.5	1,41
		452MC4509	2	9	7	4.7	4.5	1,64
		453MC4509	2	10	7	4.7	4.5	1,65
		454MC4509	2	1	9	4.7	4.5	1,75
		455MC4509	2	2	9	4.7	4.5	1,75
		456MC4509	2	3	9	4.7	4.5	1,75
		457MC4509	2	4	9	4.7	4.5	1,77
		458MC4509	2	5	9	4.7	4.5	1,77
		459MC4509	2	6	9	4.7	4.5	1,78
		4510MC4509	2	7	9	4.7	4.5	1,81
		451MC4511	2	8	9	4.7	4.5	1,84
		452MC4511	2	9	9	4.7	4.5	1,78
		453MC4511	2	10	9	4.7	4.5	1,81
		454MC4511	2	1	11	4.7	4.5	1,83
		455MC4511	2	2	11	4.7	4.5	1,79
		456MC4511	2	3	11	4.7	4.5	1,83
		457MC4511	2	4	11	4.7	4.5	1,86

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		458MC4511	2	5	11	4.7	4.5	1,77
		459MC4511	2	6	11	4.7	4.5	1,78
		4510MC4511	2	7	11	4.7	4.5	1,81
		451MC4513	2	8	11	4.7	4.5	1,84
		452MC4513	2	9	11	4.7	4.5	1,78
		453MC4513	2	10	11	4.7	4.5	1,81
		454MC4513	2	1	13	4.7	4.5	1,88
		455MC4513	2	2	13	4.7	4.5	1,89
		456MC4513	2	3	13	4.7	4.5	1,90
		457MC4513	2	4	13	4.7	4.5	1,91
		458MC4513	2	5	13	4.7	4.5	1,93
		459MC4513	2	6	13	4.7	4.5	1,95
		4510MC4513	2	7	13	4.7	4.5	1,96
		501MC4007	2	8	13	4.7	4.5	1,98
		502MC4007	2	9	13	4.7	4.5	1,98
		503MC4007	2	10	13	4.7	4.5	1,99
		504MC4007	2	1	7	5.2	4	0,28
		505MC4007	2	2	7	5.2	4	0,30
		506MC4007	2	3	7	5.2	4	0,38
		507MC4007	2	4	7	5.2	4	0,42
		508MC4007	2	5	7	5.2	4	0,50
		509MC4007	2	6	7	5.2	4	0,55
		5010MC4007	2	7	7	5.2	4	0,32
		501MC4009	2	8	7	5.2	4	0,47
		502MC4009	2	9	7	5.2	4	0,55
		503MC4009	2	10	7	5.2	4	0,65
		504MC4009	2	1	9	5.2	4	0,66
		505MC4009	2	2	9	5.2	4	0,67
		506MC4009	2	3	9	5.2	4	0,68

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05)
		507MC4009	2	4	9	5.2	4	0,48
		508MC4009	2	5	9	5.2	4	0,55
		509MC4009	2	6	9	5.2	4	0,65
		5010MC4009	2	7	9	5.2	4	0,66
		501MC4011	2	8	9	5.2	4	0,66
		502MC4011	2	9	9	5.2	4	0,67
		503MC4011	2	10	9	5.2	4	0,68
		504MC4011	2	1	11	5.2	4	1,41
		505MC4011	2	2	11	5.2	4	1,41
		506MC4011	2	3	11	5.2	4	1,64
		507MC4011	2	4	11	5.2	4	1,65
		508MC4011	2	5	11	5.2	4	1,75
		509MC4011	2	6	11	5.2	4	1,75
		5010MC4011	2	7	11	5.2	4	1,75
		501MC4013	2	8	11	5.2	4	1,77
		502MC4013	2	9	11	5.2	4	1,77
		503MC4013	2	10	11	5.2	4	1,78
		504MC4013	2	1	13	5.2	4	1,41
		505MC4013	2	2	13	5.2	4	1,41
		506MC4013	2	3	13	5.2	4	1,64
		507MC4013	2	4	13	5.2	4	1,65
		508MC4013	2	5	13	5.2	4	1,75
		509MC4013	2	6	13	5.2	4	1,75
		5010MC401	2	7	13	5.2	4	1,75
		3501MC4507	2	8	13	5.2	4	1,77
		502MC4507	2	9	13	5.2	4	1,77
		503MC4507	2	10	13	5.2	4	1,77
		504MC4507	2	1	7	5.2	4.5	1,77
		505MC4507	2	2	7	5.2	4.5	1,78

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		506MC4507	2	3	7	5.2	4.5	0,28
		507MC4507	2	4	7	5.2	4.5	0,30
		508MC4507	2	5	7	5.2	4.5	0,38
		509MC4507	2	6	7	5.2	4.5	0,42
		5010MC4507	2	7	7	5.2	4.5	0,50
		501MC4509	2	8	7	5.2	4.5	0,55
		502MC4509	2	9	7	5.2	4.5	0,32
		503MC4509	2	10	7	5.2	4.5	0,47
		504MC4509	2	1	9	5.2	4.5	0,55
		505MC4509	2	2	9	5.2	4.5	0,65
		506MC4509	2	3	9	5.2	4.5	1,75
		507MC4509	2	4	9	5.2	4.5	1,75
		508MC4509	2	5	9	5.2	4.5	1,77
		509MC4509	2	6	9	5.2	4.5	1,77
		5010MC4509	2	7	9	5.2	4.5	1,78
		501MC4511	2	8	9	5.2	4.5	1,41
		502MC4511	2	9	9	5.2	4.5	1,41
		503MC4511	2	10	9	5.2	4.5	1,64
		504MC4511	2	1	11	5.2	4.5	1,65
		505MC4511	2	2	11	5.2	4.5	1,75
		506MC4511	2	3	11	5.2	4.5	1,75
		507MC4511	2	4	11	5.2	4.5	1,64
		508MC4511	2	5	11	5.2	4.5	1,65
		509MC4511	2	6	11	5.2	4.5	1,75
		5010MC4511	2	7	11	5.2	4.5	1,75
		501MC4513	2	8	11	5.2	4.5	1,75
		502MC4513	2	9	11	5.2	4.5	1,77
		503MC4513	2	10	11	5.2	4.5	1,77
		504MC4513	2	1	13	5.2	4.5	1,77

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		505MC4513	2	2	13	5.2	4.5	0,65
		506MC4513	2	3	13	5.2	4.5	1,75
		507MC4513	2	4	13	5.2	4.5	1,75
		508MC4513	2	5	13	5.2	4.5	1,77
		509MC4513	2	6	13	5.2	4.5	1,77
		5010MC4513	2	7	13	5.2	4.5	1,78
		551MC4507	2	8	13	5.2	4.5	1,41
		552MC4507	2	9	13	5.2	4.5	1,75
		553MC4507	2	10	13	5.2	4.5	1,75
		554MC4507	2	1	7	5.7	4.5	1,64
		555MC4507	2	2	7	5.7	4.5	1,65
		556MC4507	2	3	7	5.7	4.5	1,75
		557MC4507	2	4	7	5.7	4.5	1,75
		558MC4507	2	5	7	5.7	4.5	0,65
		559MC4507	2	6	7	5.7	4.5	0,66
		5510MC4507	2	7	7	5.7	4.5	0,66
		551MC4509	2	8	7	5.7	4.5	1,75
		552MC4509	2	9	7	5.7	4.5	1,64
		553MC4509	2	10	7	5.7	4.5	1,65
		554MC4509	2	1	9	5.7	4.5	1,75
		555MC4509	2	2	9	5.7	4.5	1,75
		556MC4509	2	3	9	5.7	4.5	0,65
		557MC4509	2	4	9	5.7	4.5	0,66
		558MC4509	2	5	9	5.7	4.5	0,66
		559MC4509	2	6	9	5.7	4.5	0,67
		5510MC4509	2	7	9	5.7	4.5	1,64
		551MC4511	2	8	9	5.7	4.5	1,65
		552MC4511	2	9	9	5.7	4.5	1,75
		553MC4511	2	10	9	5.7	4.5	1,75

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		554MC4511	2	1	11	5.7	4.5	1,78
		555MC4511	2	2	11	5.7	4.5	1,41
		556MC4511	2	3	11	5.7	4.5	1,41
		557MC4511	2	4	11	5.7	4.5	1,64
		558MC4511	2	5	11	5.7	4.5	1,65
		559MC4511	2	6	11	5.7	4.5	1,75
		5510MC4511	2	7	11	5.7	4.5	1,77
		551MC4513	2	8	11	5.7	4.5	1,77
		552MC4513	2	9	11	5.7	4.5	1,78
		553MC4513	2	10	11	5.7	4.5	1,41
		554MC4513	2	1	13	5.7	4.5	1,75
		555MC4513	2	2	13	5.7	4.5	0,30
		556MC4513	2	3	13	5.7	4.5	0,38
		557MC4513	2	4	13	5.7	4.5	0,42
		558MC4513	2	5	13	5.7	4.5	0,50
		559MC4513	2	6	13	5.7	4.5	1,64
		5510MC4513	2	7	13	5.7	4.5	1,65
		551MC5007	2	8	13	5.7	4.5	1,75
		552MC5007	2	9	13	5.7	4.5	1,77
		553MC5007	2	10	13	5.7	4.5	1,77
		554MC5007	2	1	7	5.7	5	1,78
		555MC5007	2	2	7	5.7	5	1,41
		556MC5007	2	3	7	5.7	5	1,65
		557MC5007	2	4	7	5.7	5	1,75
		558MC5007	2	5	7	5.7	5	1,77
		559MC5007	2	6	7	5.7	5	1,77
		5510MC5007	2	7	7	5.7	5	1,78
		551MC5009	2	8	7	5.7	5	1,78
		552MC5009	2	9	7	5.7	5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		553MC5009	2	10	7	5.7	5	0,30
		554MC5009	2	1	9	5.7	5	0,38
		555MC5009	2	2	9	5.7	5	0,42
		556MC5009	2	3	9	5.7	5	0,50
		557MC5009	2	4	9	5.7	5	0,55
		558MC5009	2	5	9	5.7	5	0,32
		559MC5009	2	6	9	5.7	5	1,65
		5510MC5009	2	7	9	5.7	5	1,75
		551MC5011	2	8	9	5.7	5	1,77
		552MC5011	2	9	9	5.7	5	1,77
		553MC5011	2	10	9	5.7	5	1,78
		554MC5011	2	1	11	5.7	5	1,78
		555MC5011	2	2	11	5.7	5	1,41
		556MC5011	2	3	11	5.7	5	0,42
		557MC5011	2	4	11	5.7	5	0,50
		558MC5011	2	5	11	5.7	5	0,55
		559MC5011	2	6	11	5.7	5	0,32
		5510MC5011	2	7	11	5.7	5	1,65
		551MC5013	2	8	11	5.7	5	1,75
		552MC5013	2	9	11	5.7	5	1,77
		553MC5013	2	10	11	5.7	5	1,77
		554MC5013	2	1	13	5.7	5	1,78
		555MC5013	2	2	13	5.7	5	1,78
		556MC5013	2	3	13	5.7	5	1,41
		557MC5013	2	4	13	5.7	5	0,42
		558MC5013	2	5	13	5.7	5	0,50
		559MC5013	2	6	13	5.7	5	1,78
		5510MC5013	2	7	13	5.7	5	1,41
		551MC5507	2	8	13	5.7	5	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		552MC5507	2	9	13	5.7	5	0,42
		553MC5507	2	10	13	5.7	5	0,50
		554MC5507	2	1	7	5.7	5.5	0,55
		555MC5507	2	2	7	5.7	5.5	0,32
		556MC5507	2	3	7	5.7	5.5	1,65
		557MC5507	2	4	7	5.7	5.5	1,75
		558MC5507	2	5	7	5.7	5.5	1,77
		559MC5507	2	6	7	5.7	5.5	1,77
		5510MC5507	2	7	7	5.7	5.5	1,78
		551MC5509	2	8	7	5.7	5.5	1,78
		552MC5509	2	9	7	5.7	5.5	1,41
		553MC5509	2	10	7	5.7	5.5	0,42
		554MC5509	2	1	9	5.7	5.5	0,50
		555MC5509	2	2	9	5.7	5.5	0,55
		556MC5509	2	3	9	5.7	5.5	0,42
		557MC5509	2	4	9	5.7	5.5	0,50
		558MC5509	2	5	9	5.7	5.5	0,55
		559MC5509	2	6	9	5.7	5.5	0,32
		5510MC5509	2	7	9	5.7	5.5	1,65
		551MC5511	2	8	9	5.7	5.5	1,75
		552MC5511	2	9	9	5.7	5.5	1,77
		553MC5511	2	10	9	5.7	5.5	1,77
		554MC5511	2	1	11	5.7	5.5	1,78
		555MC5511	2	2	11	5.7	5.5	1,78
		556MC5511	2	3	11	5.7	5.5	1,41
		557MC5511	2	4	11	5.7	5.5	0,42
		558MC5511	2	5	11	5.7	5.5	0,50
		559MC5511	2	6	11	5.7	5.5	0,55
		5510MC5511	2	7	11	5.7	5.5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		551MC5513	2	8	11	5.7	5.5	1,78
		552MC5513	2	9	11	5.7	5.5	1,78
		553MC5513	2	10	11	5.7	5.5	1,41
		554MC5513	2	1	13	5.7	5.5	0,42
		555MC5513	2	2	13	5.7	5.5	0,50
		556MC5513	2	3	13	5.7	5.5	0,55
		557MC5513	2	4	13	5.7	5.5	1,41
		558MC5513	2	5	13	5.7	5.5	1,78
		559MC5513	2	6	13	5.7	5.5	1,41
		5510MC5513	2	7	13	5.7	5.5	0,42
		551MC6007	2	8	13	5.7	5.5	0,50
		552MC6007	2	9	13	5.7	5.5	0,55
		553MC6007	2	10	13	5.7	5.5	1,78
		554MC6007	2	1	7	5.7	6	1,78
		555MC6007	2	2	7	5.7	6	1,41
		556MC6007	2	3	7	5.7	6	0,42
		557MC6007	2	4	7	5.7	6	0,50
		558MC6007	2	5	7	5.7	6	0,55
		559MC6007	2	6	7	5.7	6	1,41
		5510MC6007	2	7	7	5.7	6	1,78
		551MC6009	2	8	7	5.7	6	1,41
		552MC6009	2	9	7	5.7	6	0,42
		553MC6009	2	10	7	5.7	6	0,50
		554MC6009	2	1	9	5.7	6	0,55
		555MC6009	2	2	9	5.7	6	0,32
		556MC6009	2	3	9	5.7	6	1,65
		557MC6009	2	4	9	5.7	6	1,75
		558MC6009	2	5	9	5.7	6	1,77
		559MC6009	2	6	9	5.7	6	1,77

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		5510MC6009	2	7	9	5.7	6	0,50
		551MC6011	2	8	9	5.7	6	0,55
		552MC6011	2	9	9	5.7	6	1,41
		553MC6011	2	10	9	5.7	6	1,78
		554MC6011	2	1	11	5.7	6	1,41
		555MC6011	2	2	11	5.7	6	0,42
		556MC6011	2	3	11	5.7	6	0,50
		557MC6011	2	4	11	5.7	6	0,55
		558MC6011	2	5	11	5.7	6	0,32
		559MC6011	2	6	11	5.7	6	1,65
		5510MC6011	2	7	11	5.7	6	1,41
		551MC6013	2	8	11	5.7	6	0,42
		552MC6013	2	9	11	5.7	6	0,50
		553MC6013	2	10	11	5.7	6	0,55
		554MC6013	2	1	13	5.7	6	1,78
		555MC6013	2	2	13	5.7	6	1,41
		556MC6013	2	3	13	5.7	6	0,42
		557MC6013	2	4	13	5.7	6	0,50
		558MC6013	2	5	13	5.7	6	0,55
		559MC6013	2	6	13	5.7	6	0,32
		5510MC6013	2	7	13	5.7	6	1,65
		551MC6507	2	8	13	5.7	6	1,41
		552MC6507	2	9	13	5.7	6	0,42
		553MC6507	2	10	13	5.7	6	0,50
		554MC6507	2	1	7	5.7	6.5	0,55
		555MC6507	2	2	7	5.7	6.5	1,78
		556MC6507	2	3	7	5.7	6.5	1,78
		557MC6507	2	4	7	5.7	6.5	1,41
		558MC6507	2	5	7	5.7	6.5	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		559MC6507	2	6	7	5.7	6.5	1,78
		5510MC6507	2	7	7	5.7	6.5	1,41
		551MC6509	2	8	7	5.7	6.5	0,42
		552MC6509	2	9	7	5.7	6.5	0,50
		553MC6509	2	10	7	5.7	6.5	0,55
		554MC6509	2	1	9	5.7	6.5	1,78
		555MC6509	2	2	9	5.7	6.5	1,41
		556MC6509	2	3	9	5.7	6.5	0,42
		557MC6509	2	4	9	5.7	6.5	0,50
		558MC6509	2	5	9	5.7	6.5	0,55
		559MC6509	2	6	9	5.7	6.5	0,32
		5510MC6509	2	7	9	5.7	6.5	1,65
		551MC6511	2	8	9	5.7	6.5	1,41
		552MC6511	2	9	9	5.7	6.5	0,42
		553MC6511	2	10	9	5.7	6.5	1,78
		554MC6511	2	1	11	5.7	6.5	1,41
		555MC6511	2	2	11	5.7	6.5	0,42
		556MC6511	2	3	11	5.7	6.5	0,50
		557MC6511	2	4	11	5.7	6.5	0,55
		558MC6511	2	5	11	5.7	6.5	0,32
		559MC6511	2	6	11	5.7	6.5	1,65
		5510MC6511	2	7	11	5.7	6.5	1,41
		551MC6513	2	8	11	5.7	6.5	0,42
		552MC6513	2	9	11	5.7	6.5	0,50
		553MC6513	2	10	11	5.7	6.5	0,55
		554MC6513	2	1	13	5.7	6.5	1,78
		555MC6513	2	2	13	5.7	6.5	1,78
		556MC6513	2	3	13	5.7	6.5	1,41
		557MC6513	2	4	13	5.7	6.5	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		558MC6513	2	5	13	5.7	6.5	1,78
		559MC6513	2	6	13	5.7	6.5	1,41
		5510MC6513	2	7	13	5.7	6.5	0,42
		601MC5007	2	8	13	5.7	6.5	0,50
		602MC5007	2	9	13	5.7	6.5	0,55
		602MC5007	2	10	13	5.7	6.5	1,78
		603MC5007	2	1	7	6	5	1,41
		604MC5007	2	2	7	6	5	0,42
		605MC5007	2	3	7	6	5	0,50
		606MC5007	2	4	7	6	5	0,55
		607MC5007	2	5	7	6	5	0,32
		608MC5007	2	6	7	6	5	1,65
		609MC5007	2	7	7	6	5	1,41
		6010MC5007	2	8	7	6	5	0,42
		601MC5009	2	9	7	6	5	1,78
		602MC5009	2	10	7	6	5	1,41
		603MC5009	2	1	9	6	5	0,42
		604MC5009	2	2	9	6	5	0,50
		605MC5009	2	3	9	6	5	0,55
		606MC5009	2	4	9	6	5	0,32
		607MC5009	2	5	9	6	5	1,65
		608MC5009	2	6	9	6	5	1,41
		609MC5009	2	7	9	6	5	0,42
		6010MC5009	2	8	9	6	5	0,50
		601MC5011	2	9	9	6	5	0,55
		602MC5011	2	10	9	6	5	1,78
		603MC5011	2	1	11	6	5	1,78
		604MC5011	2	2	11	6	5	1,41
		605MC5011	2	3	11	6	5	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		606MC5011	2	4	11	6	5	0,42
		607MC5011	2	5	11	6	5	0,50
		608MC5011	2	6	11	6	5	0,55
		609MC5011	2	7	11	6	5	0,32
		6010MC5011	2	8	11	6	5	1,65
		601MC5013	2	9	11	6	5	1,75
		602MC5013	2	10	11	6	5	1,77
		603MC5013	2	1	13	6	5	1,77
		604MC5013	2	2	13	6	5	1,78
		605MC5013	2	3	13	6	5	1,78
		606MC5013	2	4	13	6	5	1,41
		607MC5013	2	5	13	6	5	0,42
		608MC5013	2	6	13	6	5	0,50
		609MC5013	2	7	13	6	5	0,55
		6010MC5013	2	8	13	6	5	0,42
		601MC5507	2	9	13	6	5	0,50
		602MC5507	2	10	13	6	5	0,55
		603MC5507	2	1	7	6	5,5	0,32
		604MC5507	2	2	7	6	5,5	1,65
		605MC5507	2	3	7	6	5,5	1,75
		606MC5507	2	4	7	6	5,5	1,77
		607MC5507	2	5	7	6	5,5	1,77
		608MC5507	2	6	7	6	5,5	1,78
		609MC5507	2	7	7	6	5,5	1,78
		6010MC5507	2	8	7	6	5,5	1,41
		601MC5509	2	9	7	6	5,5	0,42
		602MC5509	2	10	7	6	5,5	0,50
		603MC5509	2	1	9	6	5,5	0,55
		604MC5509	2	2	9	6	5,5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		605MC5509	2	3	9	6	5.5	1,78
		606MC5509	2	4	9	6	5.5	1,41
		607MC5509	2	5	9	6	5.5	0,42
		608MC5509	2	6	9	6	5.5	0,50
		609MC5509	2	7	9	6	5.5	0,55
		6010MC5509	2	8	9	6	5.5	0,42
		601MC5511	2	9	9	6	5.5	0,50
		602MC5511	2	10	9	6	5.5	0,55
		603MC5511	2	1	11	6	5.5	0,32
		604MC5511	2	2	11	6	5.5	1,65
		605MC5511	2	3	11	6	5.5	1,75
		606MC5511	2	4	11	6	5.5	0,42
		607MC5511	2	5	11	6	5.5	0,50
		608MC5511	2	6	11	6	5.5	0,55
		609MC5511	2	7	11	6	5.5	0,42
		6010MC5511	2	8	11	6	5.5	0,50
		601MC5513	2	9	11	6	5.5	0,55
		602MC5513	2	10	11	6	5.5	0,32
		603MC5513	2	1	13	6	5.5	1,65
		604MC5513	2	2	13	6	5.5	1,75
		605MC5513	2	3	13	6	5.5	0,42
		606MC5513	2	4	13	6	5.5	0,50
		607MC5513	2	5	13	6	5.5	0,55
		608MC5513	2	6	13	6	5.5	0,32
		609MC5513	2	7	13	6	5.5	1,65
		6010MC5513	2	8	13	6	5.5	1,75
		601MC6507	2	9	13	6	5.5	0,50
		602MC6507	2	10	13	6	5.5	0,55
		603MC6507	2	1	7	6	6.5	0,32

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		604MC6507	2	2	7	6	6.5	0,55
		605MC6507	2	3	7	6	6.5	0,32
		606MC6507	2	4	7	6	6.5	1,65
		607MC6507	2	5	7	6	6.5	1,75
		608MC6507	2	6	7	6	6.5	0,42
		609MC6507	2	7	7	6	6.5	0,50
		6010MC6507	2	8	7	6	6.5	0,55
		601MC6509	2	9	7	6	6.5	0,32
		602MC6509	2	10	7	6	6.5	1,65
		603MC6509	2	1	9	6	6.5	1,75
		604MC6509	2	2	9	6	6.5	0,42
		605MC6509	2	3	9	6	6.5	0,50
		606MC6509	2	4	9	6	6.5	0,55
		607MC6509	2	5	9	6	6.5	1,78
		608MC6509	2	6	9	6	6.5	1,41
		609MC6509	2	7	9	6	6.5	0,42
		6010MC6509	2	8	9	6	6.5	0,50
		601MC6511	2	9	9	6	6.5	0,55
		602MC6511	2	10	9	6	6.5	0,32
		603MC6511	2	1	11	6	6.5	1,65
		604MC6511	2	2	11	6	6.5	0,32
		605MC6511	2	3	11	6	6.5	1,65
		606MC6511	2	4	11	6	6.5	1,75
		607MC6511	2	5	11	6	6.5	0,42
		608MC6511	2	6	11	6	6.5	0,50
		609MC6511	2	7	11	6	6.5	0,55
		6010MC6511	2	8	11	6	6.5	1,78
		601MC6513	2	9	11	6	6.5	1,78
		602MC6513	2	10	11	6	6.5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		603MC6513	2	1	13	6	6.5	1,78
		604MC6513	2	2	13	6	6.5	1,41
		605MC6513	2	3	13	6	6.5	0,42
		606MC6513	2	4	13	6	6.5	0,50
		607MC6513	2	5	13	6	6.5	0,55
		608MC6513	2	6	13	6	6.5	0,42
		609MC6513	2	7	13	6	6.5	0,50
		6010MC6513	2	8	13	6	6.5	0,55
		651MC5507	2	9	13	6	6.5	0,32
		652MC5507	2	10	13	6	6.5	1,65
		653MC5507	2	1	7	6.5	5.5	1,75
		654MC5507	2	2	7	6.5	5.5	0,42
		655MC5507	2	3	7	6.5	5.5	0,50
		656MC5507	2	4	7	6.5	5.5	0,55
		657MC5507	2	5	7	6.5	5.5	0,42
		658MC5507	2	6	7	6.5	5.5	0,50
		659MC5507	2	7	7	6.5	5.5	0,55
		6510MC5507	2	8	7	6.5	5.5	0,32
		651MC5509	2	9	7	6.5	5.5	1,65
		652MC5509	2	10	7	6.5	5.5	1,75
		653MC5509	2	1	9	6.5	5.5	0,42
		654MC5509	2	2	9	6.5	5.5	0,50
		655MC5509	2	3	9	6.5	5.5	0,55
		656MC5509	2	4	9	6.5	5.5	0,32
		657MC5509	2	5	9	6.5	5.5	1,65
		658MC5509	2	6	9	6.5	5.5	1,75
		659MC5509	2	7	9	6.5	5.5	0,50
		6510MC5509	2	8	9	6.5	5.5	0,55
		651MC5511	2	9	9	6.5	5.5	0,32

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		652MC5511	2	10	9	6.5	5.5	0,26
		653MC5511	2	1	11	6.5	5.5	0,28
		654MC5511	2	2	11	6.5	5.5	0,36
		655MC5511	2	3	11	6.5	5.5	0,44
		656MC5511	2	4	11	6.5	5.5	0,52
		657MC5511	2	5	11	6.5	5.5	0,59
		658MC5511	2	6	11	6.5	5.5	0,35
		659MC5511	2	7	11	6.5	5.5	0,45
		6510MC5511	2	8	11	6.5	5.5	0,55
		651MC5513	2	9	11	6.5	5.5	0,65
		652MC5513	2	10	11	6.5	5.5	0,76
		653MC5513	2	1	13	6.5	5.5	0,44
		654MC5513	2	2	13	6.5	5.5	0,57
		655MC5513	2	3	13	6.5	5.5	0,69
		656MC5513	2	4	13	6.5	5.5	0,81
		657MC5513	2	5	13	6.5	5.5	0,93
		658MC5513	2	6	13	6.5	5.5	1,31
		659MC5513	2	7	13	6.5	5.5	1,31
		6510MC5513	2	8	13	6.5	5.5	1,40
		651MC6007	2	9	13	6.5	5.5	1,41
		652MC6007	2	10	13	6.5	5.5	0,44
		653MC6007	2	1	7	6.5	6	0,57
		654MC6007	2	2	7	6.5	6	0,69
		655MC6007	2	3	7	6.5	6	0,81
		656MC6007	2	4	7	6.5	6	0,93
		657MC6007	2	5	7	6.5	6	1,31
		658MC6007	2	6	7	6.5	6	0,81
		659MC6007	2	7	7	6.5	6	0,93
		6510MC6007	2	8	7	6.5	6	1,31

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		651MC6009	2	9	7	6.5	6	1,78
		652MC6009	2	10	7	6.5	6	1,41
		653MC6009	2	1	9	6.5	6	0,42
		654MC6009	2	2	9	6.5	6	0,50
		655MC6009	2	3	9	6.5	6	0,55
		656MC6009	2	4	9	6.5	6	0,42
		657MC6009	2	5	9	6.5	6	0,50
		658MC6009	2	6	9	6.5	6	0,55
		659MC6009	2	7	9	6.5	6	0,32
		6510MC6009	2	8	9	6.5	6	1,65
		651MC6011	2	9	9	6.5	6	1,75
		652MC6011	2	10	9	6.5	6	0,42
		653MC6011	2	1	11	6.5	6	1,75
		654MC6011	2	2	11	6.5	6	0,42
		655MC6011	2	3	11	6.5	6	0,50
		656MC6011	2	4	11	6.5	6	0,55
		657MC6011	2	7	11	6.5	6	0,55
		658MC6011	2	8	11	6.5	6	0,32
		659MC6011	2	9	11	6.5	6	1,65
		6510MC6011	2	10	11	6.5	6	1,75
		651MC6013	2	1	13	6.5	6	0,42
		652MC6013	2	2	13	6.5	6	0,50
		653MC6013	2	3	13	6.5	6	0,55
		654MC6013	2	4	13	6.5	6	0,32
		655MC6013	2	5	13	6.5	6	1,65
		656MC6013	2	6	13	6.5	6	1,75
		657MC6013	2	7	13	6.5	6	0,50
		658MC6013	2	8	13	6.5	6	0,55
		659MC6013	2	9	13	6.5	6	0,32

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		6510MC6013	2	10	13	6.5	6	1,75
		651MC6507	2	1	7	6.5	6.5	0,42
		652MC6507	2	2	7	6.5	6.5	0,50
		653MC6507	2	3	7	6.5	6.5	0,55
		654MC6507	2	4	7	6.5	6.5	0,32
		655MC6507	2	5	7	6.5	6.5	1,65
		656MC6507	2	6	7	6.5	6.5	1,75
		657MC6507	2	7	7	6.5	6.5	1,75
		658MC6507	2	8	7	6.5	6.5	0,42
		659MC6507	2	9	7	6.5	6.5	0,50
		6510MC6507	2	10	7	6.5	6.5	0,55
		651MC6509	2	1	9	6.5	6.5	0,42
		652MC6509	2	2	9	6.5	6.5	0,50
		653MC6509	2	3	9	6.5	6.5	0,55
		654MC6509	2	4	9	6.5	6.5	0,32
		655MC6509	2	5	9	6.5	6.5	1,65
		656MC6509	2	6	9	6.5	6.5	1,75
		657MC6509	2	7	9	6.5	6.5	1,75
		658MC6509	2	8	9	6.5	6.5	0,42
		659MC6509	2	9	9	6.5	6.5	0,50
		6510MC6509	2	10	9	6.5	6.5	0,55
		651MC6511	2	1	11	6.5	6.5	0,55
		652MC6511	2	2	11	6.5	6.5	0,32
		653MC6511	2	3	11	6.5	6.5	1,65
		654MC6511	2	4	11	6.5	6.5	1,75
		655MC6511	2	5	11	6.5	6.5	0,42
		656MC6511	2	6	11	6.5	6.5	1,75
		657MC6511	2	7	11	6.5	6.5	0,42
		658MC6511	2	8	11	6.5	6.5	1,75

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		659MC6511	2	9	11	6.5	6.5	1,41
		6510MC6511	2	10	11	6.5	6.5	0,42
		651MC6513	2	1	13	6.5	6.5	0,50
		652MC6513	2	2	13	6.5	6.5	0,55
		653MC6513	2	3	13	6.5	6.5	0,42
		654MC6513	2	4	13	6.5	6.5	0,50
		655MC6513	2	5	13	6.5	6.5	0,32
		656MC6513	2	6	13	6.5	6.5	1,65
		657MC6513	2	7	13	6.5	6.5	1,75
		658MC6513	2	8	13	6.5	6.5	1,75
		659MC6513	2	9	13	6.5	6.5	1,75
		6510MC6513	2	10	13	6.5	6.5	0,42

D

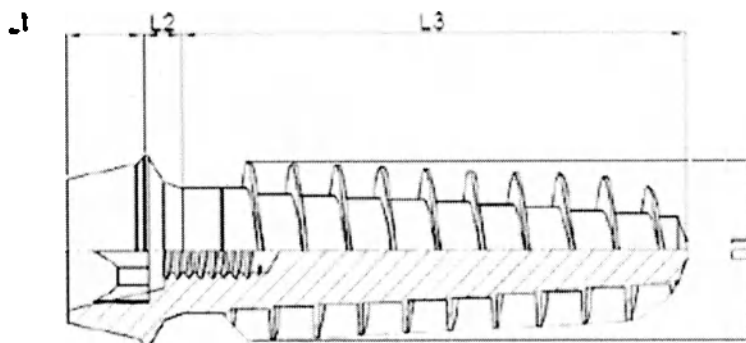
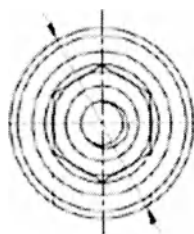


Рис. 2. Имплантаты дентальные IBS Magicore 451M4007

Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)

Допустимое отклонение=±0.05 мм

Наружная резьба: макс. диаметр=4±0.05 мм, мин. диаметр=3.32±0.05 мм, высота профиля=0,75^{+0.05}_{-0.00} мм, шаг=1.15±0.05 мм, угол резьбы=4°±0.05°, метрическая

Внутренняя резьба: диаметр=1.65±0.05 мм, шаг=0.35±0.05 мм, метрическая

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
2.	Имплантаты дентальные IBS Magicore	451M4007	2	1	7	4.7	4	1,75
		452M4007	2	2	7	4.7	4	0,42
		453M4007	2	3	7	4.7	4	0,50
		454M4007	2	4	7	4.7	4	0,55
		455M4007	2	5	7	4.7	4	0,32

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Масса, г (±0,05)
		456M4007	2	6	7	4.7	4	1,65
		457M4007	2	7	7	4.7	4	1,75
		458M4007	2	8	7	4.7	4	1,75
		459M4007	2	9	7	4.7	4	0,42
		4510M4007	2	10	7	4.7	4	0,50
		451M4009	2	1	9	4.7	4	0,55
		452M4009	2	2	9	4.7	4	0,42
		453M4009	2	3	9	4.7	4	0,50
		454M4009	2	4	9	4.7	4	0,55
		455M4009	2	5	9	4.7	4	0,32
		456M4009	2	6	9	4.7	4	1,65
		457M4009	2	7	9	4.7	4	1,75
		458M4009	2	8	9	4.7	4	1,75
		459M4009	2	9	9	4.7	4	0,42
		4510M4009	2	10	9	4.7	4	0,50
		451M4011	2	1	11	4.7	4	0,55
		452M4011	2	2	11	4.7	4	0,55
		453M4011	2	3	11	4.7	4	0,32
		454M4011	2	4	11	4.7	4	1,65
		455M4011	2	5	11	4.7	4	1,75
		456M4011	2	6	11	4.7	4	0,42
		457M4011	2	7	11	4.7	4	1,75
		458M4011	2	8	11	4.7	4	0,42
		459M4011	2	9	11	4.7	4	1,75



№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		4510M4011	2	10	11	4.7	4	1,78
		451M4013	2	1	13	4.7	4	1,41
		452M4013	2	2	13	4.7	4	0,42
		453M4013	2	3	13	4.7	4	0,50
		454M4013	2	4	13	4.7	4	0,55
		455M4013	2	5	13	4.7	4	0,42
		456M4013	2	6	13	4.7	4	0,50
		457M4013	2	7	13	4.7	4	0,55
		458M4013	2	8	13	4.7	4	0,32
		459M4013	2	9	13	4.7	4	1,65
		4510M4013	2	10	13	4.7	4	1,75
		451M4507	2	1	7	4.7	4.5	0,42
		452M4507	2	2	7	4.7	4.5	1,75
		453M4507	2	3	7	4.7	4.5	0,42
		454M4507	2	4	7	4.7	4.5	0,50
		455M4507	2	5	7	4.7	4.5	0,55
		456M4507	2	6	7	4.7	4.5	0,55
		457M4507	2	7	7	4.7	4.5	0,32
		458M4507	2	8	7	4.7	4.5	1,65
		459M4507	2	9	7	4.7	4.5	1,75
		4510M4507	2	10	7	4.7	4.5	0,42
		451M4509	2	1	9	4.7	4.5	0,50
		452M4509	2	2	9	4.7	4.5	0,55
		453M4509	2	3	9	4.7	4.5	0,32
		454M4509	2	4	9	4.7	4.5	1,65
		455M4509	2	5	9	4.7	4.5	1,75
		456M4509	2	6	9	4.7	4.5	0,50
		457M4509	2	7	9	4.7	4.5	0,55
		458M4509	2	8	9	4.7	4.5	0,32

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		459M4509	2	9	9	4.7	4.5	0,26
		4510M4509	2	10	9	4.7	4.5	0,28
		451M4511	2	1	11	4.7	4.5	0,36
		452M4511	2	2	11	4.7	4.5	0,44
		453M4511	2	3	11	4.7	4.5	0,52
		454M4511	2	4	11	4.7	4.5	0,59
		455M4511	2	5	11	4.7	4.5	0,35
		456M4511	2	6	11	4.7	4.5	0,45
		457M4511	2	7	11	4.7	4.5	0,55
		458M4511	2	8	11	4.7	4.5	0,65
		459M4511	2	9	11	4.7	4.5	0,76
		4510M4511	2	10	11	4.7	4.5	0,44
		451M4513	2	1	13	4.7	4.5	0,57
		452M4513	2	2	13	4.7	4.5	0,69
		453M4513	2	3	13	4.7	4.5	0,81
		454M4513	2	4	13	4.7	4.5	0,93
		455M4513	2	5	13	4.7	4.5	1,31
		456M4513	2	6	13	4.7	4.5	1,31
		457M4513	2	7	13	4.7	4.5	1,40
		458M4513	2	8	13	4.7	4.5	1,41
		459M4513	2	9	13	4.7	4.5	0,44
		4510M4513	2	10	13	4.7	4.5	0,57
		501M4007	2	1	7	5.2	4	0,69
		502M4007	2	2	7	5.2	4	0,81
		503M4007	2	3	7	5.2	4	0,93
		504M4007	2	4	7	5.2	4	1,31
		505M4007	2	5	7	5.2	4	0,81
		506M4007	2	6	7	5.2	4	0,93
		507M4007	2	7	7	5.2	4	1,31

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		508M4007	2	8	7	5.2	4	1,78
		509M4007	2	9	7	5.2	4	1,41
		5010M4007	2	10	7	5.2	4	0,42
		501M4009	2	1	9	5.2	4	0,50
		502M4009	2	2	9	5.2	4	0,55
		503M4009	2	3	9	5.2	4	0,42
		504M4009	2	4	9	5.2	4	0,50
		505M4009	2	5	9	5.2	4	0,55
		506M4009	2	6	9	5.2	4	0,32
		507M4009	2	7	9	5.2	4	1,65
		508M4009	2	8	9	5.2	4	1,75
		509M4009	2	9	9	5.2	4	0,42
		5010M4009	2	10	9	5.2	4	0,50
		501M4011	2	1	11	5.2	4	0,55
		502M4011	2	2	11	5.2	4	0,42
		503M4011	2	3	11	5.2	4	0,50
		504M4011	2	4	11	5.2	4	0,55
		505M4011	2	5	11	5.2	4	0,32
		506M4011	2	6	11	5.2	4	1,65
		507M4011	2	7	11	5.2	4	1,75
		508M4011	2	8	11	5.2	4	0,42
		509M4011	2	9	11	5.2	4	0,50
		5010M4011	2	10	11	5.2	4	0,55
		501M4013	2	1	13	5.2	4	0,32
		502M4013	2	2	13	5.2	4	1,65
		503M4013	2	3	13	5.2	4	1,75
		504M4013	2	4	13	5.2	4	0,50
		505M4013	2	5	13	5.2	4	0,55
		506M4013	2	6	13	5.2	4	0,32

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		507M4013	2	7	13	5.2	4	0,55
		508M4013	2	8	13	5.2	4	0,32
		509M4013	2	9	13	5.2	4	1,65
		5010M4013	2	10	13	5.2	4	1,75
		501M4507	2	1	7	5.2	4.5	0,42
		502M4507	2	2	7	5.2	4.5	0,50
		503M4507	2	3	7	5.2	4.5	0,55
		504M4507	2	4	7	5.2	4.5	0,32
		505M4507	2	5	7	5.2	4.5	1,65
		506M4507	2	6	7	5.2	4.5	1,75
		507M4507	2	7	7	5.2	4.5	0,42
		508M4507	2	8	7	5.2	4.5	0,50
		509M4507	2	9	7	5.2	4.5	0,55
		5010M4507	2	10	7	5.2	4.5	1,78
		501M4509	2	1	9	5.2	4.5	1,41
		502M4509	2	2	9	5.2	4.5	0,42
		503M4509	2	3	9	5.2	4.5	0,50
		504M4509	2	4	9	5.2	4.5	0,55
		505M4509	2	5	9	5.2	4.5	0,32
		506M4509	2	6	9	5.2	4.5	1,65
		507M4509	2	7	9	5.2	4.5	0,32
		508M4509	2	8	9	5.2	4.5	1,65
		509M4509	2	9	9	5.2	4.5	1,75
		5010M4509	2	10	9	5.2	4.5	0,42
		501M4511	2	1	11	5.2	4.5	0,50
		502M4511	2	2	11	5.2	4.5	0,55
		503M4511	2	3	11	5.2	4.5	1,78
		504M4511	2	4	11	5.2	4.5	1,78
		505M4511	2	5	11	5.2	4.5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		506M4511	2	6	11	5.2	4.5	1,78
		507M4511	2	7	11	5.2	4.5	1,41
		508M4511	2	8	11	5.2	4.5	0,42
		509M4511	2	9	11	5.2	4.5	0,50
		5010M4511	2	10	11	5.2	4.5	0,55
		501M4513	2	1	13	5.2	4.5	0,42
		502M4513	2	2	13	5.2	4.5	0,50
		503M4513	2	3	13	5.2	4.5	0,55
		504M4513	2	4	13	5.2	4.5	0,32
		505M4513	2	5	13	5.2	4.5	1,65
		506M4513	2	6	13	5.2	4.5	1,75
		507M4513	2	7	13	5.2	4.5	0,42
		508M4513	2	8	13	5.2	4.5	0,50
		509M4513	2	9	13	5.2	4.5	0,55
		5010M4513	2	10	13	5.2	4.5	0,42
		551M4507	2	1	7	5.7	4.5	0,50
		552M4507	2	2	7	5.7	4.5	0,55
		553M4507	2	3	7	5.7	4.5	0,32
		554M4507	2	4	7	5.7	4.5	1,65
		555M4507	2	5	7	5.7	4.5	1,75
		556M4507	2	6	7	5.7	4.5	0,42
		557M4507	2	7	7	5.7	4.5	0,50
		558M4507	2	8	7	5.7	4.5	0,55
		559M4507	2	9	7	5.7	4.5	0,32
		5510M4507	2	10	7	5.7	4.5	1,65
		551M4509	2	1	9	5.7	4.5	1,75
		552M4509	2	2	9	5.7	4.5	0,50
		553M4509	2	3	9	5.7	4.5	0,55
		554M4509	2	4	9	5.7	4.5	0,32

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		555M4509	2	5	9	5.7	4.5	0,42
		556M4509	2	6	9	5.7	4.5	0,50
		557M4509	2	7	9	5.7	4.5	0,55
		558M4509	2	8	9	5.7	4.5	0,32
		559M4509	2	9	9	5.7	4.5	1,65
		5510M4509	2	10	9	5.7	4.5	1,75
		551M4511	2	1	11	5.7	4.5	1,77
		552M4511	2	2	11	5.7	4.5	1,77
		553M4511	2	3	11	5.7	4.5	1,78
		554M4511	2	4	11	5.7	4.5	1,78
		555M4511	2	5	11	5.7	4.5	1,41
		556M4511	2	6	11	5.7	4.5	0,42
		557M4511	2	7	11	5.7	4.5	0,50
		558M4511	2	8	11	5.7	4.5	0,55
		559M4511	2	9	11	5.7	4.5	0,42
		5510M4511	2	10	11	5.7	4.5	0,50
		551M4513	2	1	13	5.7	4.5	0,55
		552M4513	2	2	13	5.7	4.5	0,32
		553M4513	2	3	13	5.7	4.5	1,65
		554M4513	2	4	13	5.7	4.5	1,75
		555M4513	2	5	13	5.7	4.5	1,77
		556M4513	2	6	13	5.7	4.5	1,77
		557M4513	2	7	13	5.7	4.5	1,78
		558M4513	2	8	13	5.7	4.5	1,78
		559M4513	2	9	13	5.7	4.5	1,41
		5510M4513	2	10	13	5.7	4.5	0,42
		551M5007	2	1	7	5.7	5	0,50
		552M5007	2	2	7	5.7	5	0,55
		553M5007	2	3	7	5.7	5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		554M5007	2	4	7	5.7	5	1,78
		555M5007	2	5	7	5.7	5	1,41
		556M5007	2	6	7	5.7	5	0,42
		557M5007	2	7	7	5.7	5	0,50
		558M5007	2	8	7	5.7	5	0,55
		559M5007	2	9	7	5.7	5	1,78
		5510M5007	2	10	7	5.7	5	1,41
		551M5009	2	1	9	5.7	5	0,42
		552M5009	2	2	9	5.7	5	0,50
		553M5009	2	3	9	5.7	5	0,55
		554M5009	2	4	9	5.7	5	0,32
		555M5009	2	5	9	5.7	5	1,65
		556M5009	2	6	9	5.7	5	1,41
		557M5009	2	7	9	5.7	5	0,42
		558M5009	2	8	9	5.7	5	1,78
		559M5009	2	9	9	5.7	5	1,41
		5510M5009	2	10	9	5.7	5	0,42
		551M5011	2	1	11	5.7	5	0,50
		552M5011	2	2	11	5.7	5	0,55
		553M5011	2	3	11	5.7	5	0,32
		554M5011	2	4	11	5.7	5	1,65
		555M5011	2	5	11	5.7	5	1,41
		556M5011	2	6	11	5.7	5	0,42
		557M5011	2	7	11	5.7	5	0,50
		558M5011	2	8	11	5.7	5	0,55
		559M5011	2	9	11	5.7	5	1,78
		5510M5011	2	10	11	5.7	5	1,78
		551M5013	2	1	13	5.7	5	1,41
		552M5013	2	2	13	5.7	5	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		553M5013	2	3	13	5.7	5	1,78
		554M5013	2	4	13	5.7	5	1,41
		555M5013	2	5	13	5.7	5	0,42
		556M5013	2	6	13	5.7	5	0,50
		557M5013	2	7	13	5.7	5	0,55
		558M5013	2	8	13	5.7	5	1,78
		559M5013	2	9	13	5.7	5	1,41
		5510M5013	2	10	13	5.7	5	0,42
		551M5507	2	1	7	5.7	5.5	0,50
		552M5507	2	2	7	5.7	5.5	0,55
		553M5507	2	3	7	5.7	5.5	0,32
		554M5507	2	4	7	5.7	5.5	1,65
		555M5507	2	5	7	5.7	5.5	1,41
		556M5507	2	6	7	5.7	5.5	0,42
		557M5507	2	7	7	5.7	5.5	1,78
		558M5507	2	8	7	5.7	5.5	1,41
		559M5507	2	9	7	5.7	5.5	0,42
		5510M5507	2	10	7	5.7	5.5	0,50
		551M5509	2	1	9	5.7	5.5	0,55
		552M5509	2	2	9	5.7	5.5	0,32
		553M5509	2	3	9	5.7	5.5	1,65
		554M5509	2	4	9	5.7	5.5	1,41
		555M5509	2	5	9	5.7	5.5	0,42
		556M5509	2	6	9	5.7	5.5	0,50
		557M5509	2	7	9	5.7	5.5	0,55
		558M5509	2	8	9	5.7	5.5	1,78
		559M5509	2	9	9	5.7	5.5	1,78
		5510M5509	2	10	9	5.7	5.5	1,41
		551M5511	2	1	11	5.7	5.5	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		552M5511	2	2	11	5.7	5.5	0,50
		553M5511	2	3	11	5.7	5.5	0,55
		554M5511	2	4	11	5.7	5.5	1,41
		555M5511	2	5	11	5.7	5.5	1,78
		556M5511	2	6	11	5.7	5.5	1,41
		557M5511	2	7	11	5.7	5.5	0,42
		558M5511	2	8	11	5.7	5.5	0,50
		559M5511	2	9	11	5.7	5.5	0,55
		5510M5511	2	10	11	5.7	5.5	0,32
		551M5513	2	1	13	5.7	5.5	1,65
		552M5513	2	2	13	5.7	5.5	1,41
		553M5513	2	3	13	5.7	5.5	0,42
		554M5513	2	4	13	5.7	5.5	0,50
		555M5513	2	5	13	5.7	5.5	0,55
		556M5513	2	6	13	5.7	5.5	1,78
		557M5513	2	7	13	5.7	5.5	1,41
		558M5513	2	8	13	5.7	5.5	0,42
		559M5513	2	9	13	5.7	5.5	0,50
		5510M5513	2	10	13	5.7	5.5	0,55
		551M6007	2	1	7	5.7	6	0,32
		552M6007	2	2	7	5.7	6	1,65
		553M6007	2	3	7	5.7	6	1,41
		554M6007	2	4	7	5.7	6	0,42
		555M6007	2	5	7	5.7	6	0,50
		556M6007	2	6	7	5.7	6	0,55
		557M6007	2	7	7	5.7	6	1,78
		558M6007	2	8	7	5.7	6	1,78
		559M6007	2	9	7	5.7	6	1,41
		5510M6007	2	10	7	5.7	6	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		551M6009	2	1	9	5.7	6	1,78
		552M6009	2	2	9	5.7	6	1,78
		553M6009	2	3	9	5.7	6	1,41
		554M6009	2	4	9	5.7	6	0,42
		555M6009	2	5	9	5.7	6	0,50
		556M6009	2	6	9	5.7	6	0,55
		557M6009	2	7	9	5.7	6	1,41
		558M6009	2	8	9	5.7	6	1,78
		559M6009	2	9	9	5.7	6	1,41
		5510M6009	2	10	9	5.7	6	0,42
		551M6011	2	1	11	5.7	6	0,50
		552M6011	2	2	11	5.7	6	0,55
		553M6011	2	3	11	5.7	6	1,78
		554M6011	2	4	11	5.7	6	1,78
		555M6011	2	5	11	5.7	6	1,41
		556M6011	2	6	11	5.7	6	0,42
		557M6011	2	7	11	5.7	6	0,50
		558M6011	2	8	11	5.7	6	0,55
		559M6011	2	9	11	5.7	6	1,41
		5510M6011	2	10	11	5.7	6	1,78
		551M6013	2	1	13	5.7	6	1,41
		552M6013	2	2	13	5.7	6	0,42
		553M6013	2	3	13	5.7	6	0,50
		554M6013	2	4	13	5.7	6	0,55
		555M6013	2	5	13	5.7	6	0,32
		556M6013	2	6	13	5.7	6	1,65
		557M6013	2	7	13	5.7	6	1,75
		558M6013	2	8	13	5.7	6	1,77
		559M6013	2	9	13	5.7	6	1,77

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		5510M6013	2	10	13	5.7	6	0,42
		551M6507	2	1	7	5.7	6.5	0,50
		552M6507	2	2	7	5.7	6.5	0,55
		553M6507	2	3	7	5.7	6.5	0,32
		554M6507	2	4	7	5.7	6.5	1,65
		555M6507	2	5	7	5.7	6.5	1,75
		556M6507	2	6	7	5.7	6.5	1,77
		557M6507	2	7	7	5.7	6.5	1,77
		558M6507	2	8	7	5.7	6.5	1,78
		559M6507	2	9	7	5.7	6.5	1,78
		5510M6507	2	10	7	5.7	6.5	1,41
		551M6509	2	1	9	5.7	6.5	0,42
		552M6509	2	2	9	5.7	6.5	0,50
		553M6509	2	3	9	5.7	6.5	0,55
		554M6509	2	4	9	5.7	6.5	0,42
		555M6509	2	5	9	5.7	6.5	0,50
		556M6509	2	6	9	5.7	6.5	0,55
		557M6509	2	7	9	5.7	6.5	0,32
		558M6509	2	8	9	5.7	6.5	1,65
		559M6509	2	9	9	5.7	6.5	1,75
		5510M6509	2	10	9	5.7	6.5	1,77
		551M6511	2	1	11	5.7	6.5	1,77
		552M6511	2	2	11	5.7	6.5	1,78
		553M6511	2	3	11	5.7	6.5	1,78
		554M6511	2	4	11	5.7	6.5	1,41
		555M6511	2	5	11	5.7	6.5	0,42
		556M6511	2	6	11	5.7	6.5	0,50
		557M6511	2	7	11	5.7	6.5	0,55
		558M6511	2	8	11	5.7	6.5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		559M6511	2	9	11	5.7	6.5	0,30
		5510M6511	2	10	11	5.7	6.5	0,38
		551M6513	2	1	13	5.7	6.5	0,42
		552M6513	2	2	13	5.7	6.5	0,50
		553M6513	2	3	13	5.7	6.5	0,55
		554M6513	2	4	13	5.7	6.5	0,32
		555M6513	2	5	13	5.7	6.5	1,65
		556M6513	2	6	13	5.7	6.5	1,75
		557M6513	2	7	13	5.7	6.5	1,77
		558M6513	2	8	13	5.7	6.5	1,77
		559M6513	2	9	13	5.7	6.5	1,78
		5510M6513	2	10	13	5.7	6.5	1,78
		601M5007	2	1	7	6	5	1,41
		602M5007	2	2	7	6	5	0,42
		603M5007	2	3	7	6	5	0,50
		604M5007	2	4	7	6	5	0,55
		605M5007	2	5	7	6	5	0,32
		606M5007	2	6	7	6	5	1,65
		607M5007	2	7	7	6	5	1,75
		608M5007	2	8	7	6	5	1,77
		609M5007	2	9	7	6	5	1,77
		6010M5007	2	10	7	6	5	1,78
		601M5009	2	1	9	6	5	1,78
		602M5009	2	2	9	6	5	1,41
		603M5009	2	3	9	6	5	0,42
		604M5009	2	4	9	6	5	0,50
		605M5009	2	5	9	6	5	1,78
		606M5009	2	6	9	6	5	1,41
		607M5009	2	7	9	6	5	0,42

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		608M5009	2	8	9	6	5	1,78
		609M5009	2	9	9	6	5	1,41
		6010M5009	2	10	9	6	5	1,41
		601M5011	2	1	11	6	5	1,64
		602M5011	2	2	11	6	5	1,65
		603M5011	2	3	11	6	5	1,75
		604M5011	2	4	11	6	5	1,77
		605M5011	2	5	11	6	5	1,77
		606M5011	2	6	11	6	5	1,78
		607M5011	2	7	11	6	5	1,41
		608M5011	2	8	11	6	5	1,75
		609M5011	2	9	11	6	5	0,30
		6010M5011	2	10	11	6	5	0,38
		601M5013	2	1	13	6	5	0,42
		602M5013	2	2	13	6	5	0,50
		603M5013	2	3	13	6	5	1,64
		604M5013	2	4	13	6	5	1,65
		605M5013	2	5	13	6	5	1,75
		606M5013	2	6	13	6	5	1,77
		607M5013	2	7	13	6	5	1,77
		608M5013	2	8	13	6	5	1,78
		609M5013	2	9	13	6	5	1,41
		6010M5013	2	10	13	6	5	1,65
		601M5507	2	1	7	6	5,5	1,75
		602M5507	2	2	7	6	5,5	1,77
		603M5507	2	3	7	6	5,5	1,77
		604M5507	2	4	7	6	5,5	1,78
		605M5507	2	5	7	6	5,5	1,78
		606M5507	2	6	7	6	5,5	1,41

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		607M5507	2	7	7	6	5.5	0,65
		608M5507	2	8	7	6	5.5	1,75
		609M5507	2	9	7	6	5.5	1,75
		6010M5507	2	10	7	6	5.5	1,77
		601M5509	2	1	9	6	5.5	1,77
		602M5509	2	2	9	6	5.5	1,78
		603M5509	2	3	9	6	5.5	1,41
		604M5509	2	4	9	6	5.5	1,75
		605M5509	2	5	9	6	5.5	1,75
		606M5509	2	6	9	6	5.5	1,64
		607M5509	2	7	9	6	5.5	1,65
		608M5509	2	8	9	6	5.5	1,75
		609M5509	2	9	9	6	5.5	1,75
		6010M5509	2	10	9	6	5.5	0,65
		601M5511	2	1	11	6	5.5	0,66
		602M5511	2	2	11	6	5.5	0,66
		603M5511	2	3	11	6	5.5	1,75
		604M5511	2	4	11	6	5.5	1,64
		605M5511	2	5	11	6	5.5	1,65
		606M5511	2	6	11	6	5.5	1,75
		607M5511	2	7	11	6	5.5	1,75
		608M5511	2	8	11	6	5.5	0,65
		609M5511	2	9	11	6	5.5	0,66
		6010M5511	2	10	11	6	5.5	0,66
		601M5513	2	1	13	6	5.5	0,67
		602M5513	2	2	13	6	5.5	1,64
		603M5513	2	3	13	6	5.5	1,65
		604M5513	2	4	13	6	5.5	1,75
		605M5513	2	5	13	6	5.5	1,75

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		606M5513	2	6	13	6	5.5	0,28
		607M5513	2	7	13	6	5.5	0,30
		608M5513	2	8	13	6	5.5	0,38
		609M5513	2	9	13	6	5.5	0,42
		6010M5513	2	10	13	6	5.5	0,50
		601M6507	2	1	7	6	6.5	0,55
		602M6507	2	2	7	6	6.5	0,32
		603M6507	2	3	7	6	6.5	0,47
		604M6507	2	4	7	6	6.5	0,55
		605M6507	2	5	7	6	6.5	0,65
		606M6507	2	6	7	6	6.5	1,75
		607M6507	2	7	7	6	6.5	1,75
		608M6507	2	8	7	6	6.5	1,77
		609M6507	2	9	7	6	6.5	1,77
		6010M6507	2	10	7	6	6.5	1,78
		601M6509	2	1	9	6	6.5	1,41
		602M6509	2	2	9	6	6.5	1,41
		603M6509	2	3	9	6	6.5	1,64
		604M6509	2	4	9	6	6.5	1,65
		605M6509	2	5	9	6	6.5	1,75
		606M6509	2	6	9	6	6.5	1,75
		607M6509	2	7	9	6	6.5	1,64
		608M6509	2	8	9	6	6.5	1,65
		609M6509	2	9	9	6	6.5	1,75
		6010M6509	2	10	9	6	6.5	1,75
		601M6511	2	1	11	6	6.5	1,75
		602M6511	2	2	11	6	6.5	1,77
		603M6511	2	3	11	6	6.5	1,77
		604M6511	2	4	11	6	6.5	1,77

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса (±0,05 г)
		605M6511	2	5	11	6	6.5	0,48
		606M6511	2	6	11	6	6.5	0,55
		607M6511	2	7	11	6	6.5	0,65
		608M6511	2	8	11	6	6.5	0,66
		609M6511	2	9	11	6	6.5	0,66
		6010M6511	2	10	11	6	6.5	0,67
		601M6513	2	1	13	6	6.5	0,68
		602M6513	2	2	13	6	6.5	1,41
		603M6513	2	3	13	6	6.5	1,41
		604M6513	2	4	13	6	6.5	1,64
		605M6513	2	5	13	6	6.5	1,65
		606M6513	2	6	13	6	6.5	1,75
		607M6513	2	7	13	6	6.5	1,75
		608M6513	2	8	13	6	6.5	1,75
		609M6513	2	9	13	6	6.5	1,77
		6010M6513	2	10	13	6	6.5	1,77
		651M5507	2	1	7	6.5	5.5	1,78
		652M5507	2	2	7	6.5	5.5	1,41
		653M5507	2	3	7	6.5	5.5	1,41
		654M5507	2	4	7	6.5	5.5	1,64
		655M5507	2	5	7	6.5	5.5	1,65
		656M5507	2	6	7	6.5	5.5	1,75
		657M5507	2	7	7	6.5	5.5	1,75
		658M5507	2	8	7	6.5	5.5	1,75
		659M5507	2	9	7	6.5	5.5	1,77
		6510M5507	2	10	7	6.5	5.5	1,77
		651M5509	2	1	9	6.5	5.5	1,77
		652M5509	2	2	9	6.5	5.5	1,77
		653M5509	2	3	9	6.5	5.5	1,78

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		654M5509	2	4	9	6.5	5.5	1,77
		655M5509	2	5	9	6.5	5.5	1,78
		656M5509	2	6	9	6.5	5.5	1,81
		657M5509	2	7	9	6.5	5.5	1,84
		658M5509	2	8	9	6.5	5.5	1,78
		659M5509	2	9	9	6.5	5.5	1,81
		6510M5509	2	10	9	6.5	5.5	1,88
		651M5511	2	1	11	6.5	5.5	1,89
		652M5511	2	2	11	6.5	5.5	1,90
		653M5511	2	3	11	6.5	5.5	1,91
		654M5511	2	4	11	6.5	5.5	1,93
		655M5511	2	5	11	6.5	5.5	1,95
		656M5511	2	6	11	6.5	5.5	1,96
		657M5511	2	7	11	6.5	5.5	1,98
		658M5511	2	8	11	6.5	5.5	1,98
		659M5511	2	9	11	6.5	5.5	1,99
		6510M5511	2	10	11	6.5	5.5	0,28
		651M5513	2	1	13	6.5	5.5	0,30
		652M5513	2	2	13	6.5	5.5	0,38
		653M5513	2	3	13	6.5	5.5	0,42
		654M5513	2	4	13	6.5	5.5	0,50
		655M5513	2	5	13	6.5	5.5	0,55
		656M5513	2	6	13	6.5	5.5	0,32
		657M5513	2	7	13	6.5	5.5	0,47
		658M5513	2	8	13	6.5	5.5	0,55
		659M5513	2	9	13	6.5	5.5	0,65
		6510M5513	2	10	13	6.5	5.5	0,66
		651M6007	2	1	7	6.5	6	0,67
		652M6007	2	2	7	6.5	6	0,68

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		653M6007	2	3	7	6.5	6	0,52
		654M6007	2	4	7	6.5	6	0,59
		655M6007	2	5	7	6.5	6	0,35
		656M6007	2	6	7	6.5	6	0,45
		657M6007	2	7	7	6.5	6	0,55
		658M6007	2	8	7	6.5	6	0,65
		659M6007	2	9	7	6.5	6	0,76
		6510M6007	2	10	7	6.5	6	0,44
		651M6009	2	1	9	6.5	6	0,57
		652M6009	2	2	9	6.5	6	0,69
		653M6009	2	3	9	6.5	6	0,81
		654M6009	2	4	9	6.5	6	0,93
		655M6009	2	5	9	6.5	6	1,31
		656M6009	2	6	9	6.5	6	1,31
		657M6009	2	7	9	6.5	6	1,40
		658M6009	2	8	9	6.5	6	1,41
		659M6009	2	9	9	6.5	6	1,41
		6510M6009	2	10	9	6.5	6	1,64
		651M6011	2	1	11	6.5	6	1,65
		652M6011	2	2	11	6.5	6	1,75
		653M6011	2	3	11	6.5	6	1,75
		654M6011	2	4	11	6.5	6	1,75
		655M6011	2	5	11	6.5	6	1,77
		656M6011	2	6	11	6.5	6	1,77
		657M6011	2	7	11	6.5	6	1,78
		658M6011	2	8	11	6.5	6	1,81
		659M6011	2	9	11	6.5	6	1,84
		6510M6011	2	10	11	6.5	6	1,78
		651M6013	2	1	13	6.5	6	1,81

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Длина (L1), мм (±1%)	Длина (L2), мм (±1%)	Длина имплантации (L3), мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
		652M6013	2	2	13	6.5	6	0,45
		653M6013	2	3	13	6.5	6	0,55
		654M6013	2	4	13	6.5	6	0,65
		655M6013	2	5	13	6.5	6	0,76
		656M6013	2	6	13	6.5	6	0,44
		657M6013	2	7	13	6.5	6	0,57
		658M6013	2	8	13	6.5	6	0,69
		659M6013	2	9	13	6.5	6	0,81
		6510M6013	2	10	13	6.5	6	0,93
		651M6507	2	1	7	6.5	6.5	1,31
		652M6507	2	2	7	6.5	6.5	1,31
		653M6507	2	3	7	6.5	6.5	1,40
		654M6507	2	4	7	6.5	6.5	1,41
		655M6507	2	5	7	6.5	6.5	1,41
		656M6507	2	6	7	6.5	6.5	1,64
		657M6507	2	7	7	6.5	6.5	1,65
		658M6507	2	8	7	6.5	6.5	1,75
		659M6507	2	9	7	6.5	6.5	1,75
		6510M6507	2	10	7	6.5	6.5	1,75
		651M6509	2	1	9	6.5	6.5	1,77
		652M6509	2	2	9	6.5	6.5	1,77
		653M6509	2	3	9	6.5	6.5	1,78
		654M6509	2	4	9	6.5	6.5	1,81
		655M6509	2	5	9	6.5	6.5	1,84
		656M6509	2	6	9	6.5	6.5	0,28
		657M6509	2	7	9	6.5	6.5	0,36
		658M6509	2	8	9	6.5	6.5	0,52
		659M6509	2	9	9	6.5	6.5	0,59
		6510M6509	2	10	9	6.5	6.5	0,35

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	диаметр резьбы, мм (±1%)	диаметр шейки, мм (±1%)	имплантации (L3), мм (±1%)	мм (±1%)	мм (±1%)	мм (±1%)
		651M6511	2	1	11	6.5	6.5	0,26
		652M6511	2	2	11	6.5	6.5	0,28
		653M6511	2	3	11	6.5	6.5	0,36
		654M6511	2	4	11	6.5	6.5	0,44
		655M6511	2	5	11	6.5	6.5	0,52
		656M6511	2	6	11	6.5	6.5	0,59
		657M6511	2	7	11	6.5	6.5	0,35
		658M6511	2	8	11	6.5	6.5	0,45
		659M6511	2	9	11	6.5	6.5	0,55
		6510M6511	2	10	11	6.5	6.5	0,65
		651M6513	2	1	13	6.5	6.5	0,76
		652M6513	2	2	13	6.5	6.5	0,81
		653M6513	2	3	13	6.5	6.5	0,93
		654M6513	2	4	13	6.5	6.5	1,31
		655M6513	2	5	13	6.5	6.5	1,31
		656M6513	2	6	13	6.5	6.5	1,40
		657M6513	2	7	13	6.5	6.5	1,41
		658M6513	2	8	13	6.5	6.5	1,41
		659M6513	2	9	13	6.5	6.5	1,64
		6510M6513	2	10	13	6.5	6.5	1,64

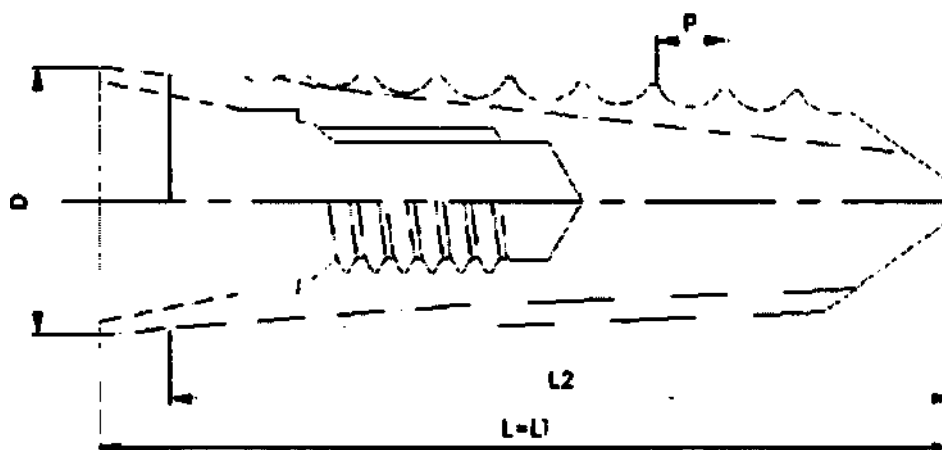
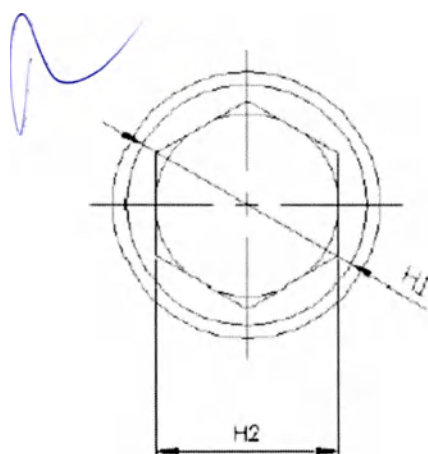



Рис. 3. Имплантаты дентальные IBS NR Fix IBS3009

Шероховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)

Допустимое отклонение=±0.05 мм

Наружная резьба: радиус резьбы=0.5±0.05 мм, макс. диаметр=3.2±0.05 мм, мин. диаметр=2.5±0.05 мм, метрическая

Внутренняя резьба: диаметр=2.0±0.05 мм, шаг=0.4±0.05 мм, метрическая

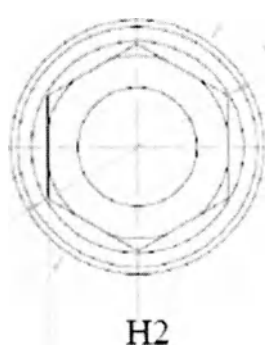

D H1 H2

Рис. 4. Имплантаты дентальные IBS NR Fix FC3009- FC3513

Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)

Допустимое отклонение=±0.05 мм

Наружная резьба: радиус резьбы=0.5±0.05 мм, макс. диаметр=3.2±0.05 мм, мин. диаметр=2.5±0.05 мм, метрическая

Внутренняя резьба: диаметр=2.0±0.05 мм, шаг=0.4±0.05 мм, метрическая

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Диаметр D, мм (±1%)	Длина L, мм (±1%)	Длина имплантации L1, мм (±1%)	Длина обработки поверхности L2, мм (±1%)	Расстояние Р, мм (±1%)	Главная часть (гексагональный H1 (±0.05 мм))	Главная часть (гексагональный H2 (±0.05 мм))	Масса, г (±0,05 г)
3.	Имплантаты дентальные IBS NR Fix	IBS3009	3.8	11	11	9	1	3.33	2.5	0,81
		FC3009	3.5	10	9	9	1.15	2.5	2.94	0,93
		FC3011	3.5	12	11	11	1.15	2.5	2.94	1,31
		FC3013	3.5	14	13	13	1.15	2.5	2.94	1,31
		FC3509	3.5	9	9	9	1.15	2.5	2.94	1,40
		FC3511	3.5	11	11	11	1.15	2.5	2.94	1,41
		FC3513	3.5	13	13	13	1.15	2.5	2.94	1,42

L=L1

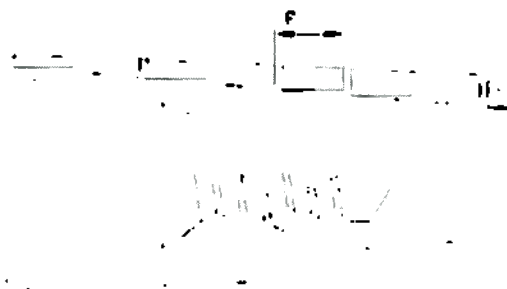
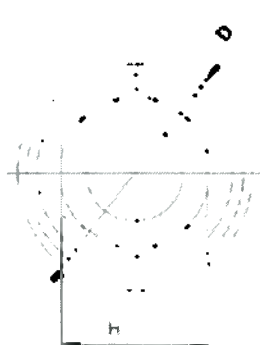


Рис. 5. Имплантаты дентальные IBS Magic FC IBS4007F

Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)

Наружная резьба: макс. диаметр=4±0.05 мм, мин. диаметр=2.62±0.05 мм, шаг=1.15±0.05 мм, метрическая

Внутренняя резьба: диаметр=2.00±0.05 мм, шаг=0.4±0.05 мм, метрическая

№	Наименование	Артикул (код для заказа)	Диаметр D, мм (±1%)	Длина L, мм (±1%)	Длина имплантации L1, мм (±1%)	Расстояние Р, мм (±1%)	Главная часть (гексагональный H (±0.05 мм))	Масса, г (±0,05 г)
4.	Имплантаты дентальные IBS Magic FC	IBS4007F	4.0	7	7	1.15	2.5	0.45
		IBS4009F	4.0	9	9	1.15	2.5	0.55
		IBS4011F	4.0	11	11	1.15	2.5	0.65
		IBS4013F	4.0	13	13	1.15	2.5	0.76
		IBS4015F	4.0	15	15	1.15	2.5	0.44

№	Ис	для заказа)	мм (±1%)	мм (±1%)	имплантации L1, мм (±1%)	мм (±1%)	пый) Н (±0.05 мм)	
		IBS4507F	4.5	7	7	1.15	2.5	0.57
		IBS4509F	4.5	9	9	1.15	2.5	0.69
		IBS4511F	4.5	11	11	1.15	2.5	0.81
		IBS4513F	4.5	13	13	1.15	2.5	0.93
		IBS4515F	4.5	15	15	1.15	2.5	1.31
		IBS5007F	5.0	7	7	1.15	2.5	1.31
		IBS5009F	5.0	9	9	1.15	2.5	1.40
		IBS5011F	5.0	11	11	1.15	2.5	1.41
		IBS5013F	5.0	13	13	1.15	2.5	1.41
		IBS5015F	5.0	15	15	1.15	2.5	1.64
		IBS5507F	5.5	7	7	1.15	2.5	1.65
		IBS5509F	5.5	9	9	1.15	2.5	1.75
		IBS5511F	5.5	11	11	1.15	2.5	1.75
		IBS5513F	5.5	13	13	1.15	2.5	1.75
		IBS5515F	5.5	15	15	1.15	2.5	1.77
		IBS6007F	6.0	7	7	1.15	2.5	1.77
		IBS6009F	6.0	9	9	1.15	2.5	1.78
		IBS6011F	6.0	11	11	1.15	2.5	1.81
		IBS6013F	6.0	13	13	1.15	2.5	1.84
		IBS6015F	6.0	15	15	1.15	2.5	0.28
		IBS6507F	6.5	7	7	1.15	2.5	0.36
		IBS6509F	6.5	9	9	1.15	2.5	0.52
		IBS6511F	6.5	11	11	1.15	2.5	0.59
		IBS6513F	6.5	13	13	1.15	2.5	0.35
		IBS6515F	6.5	15	15	1.15	2.5	1.41

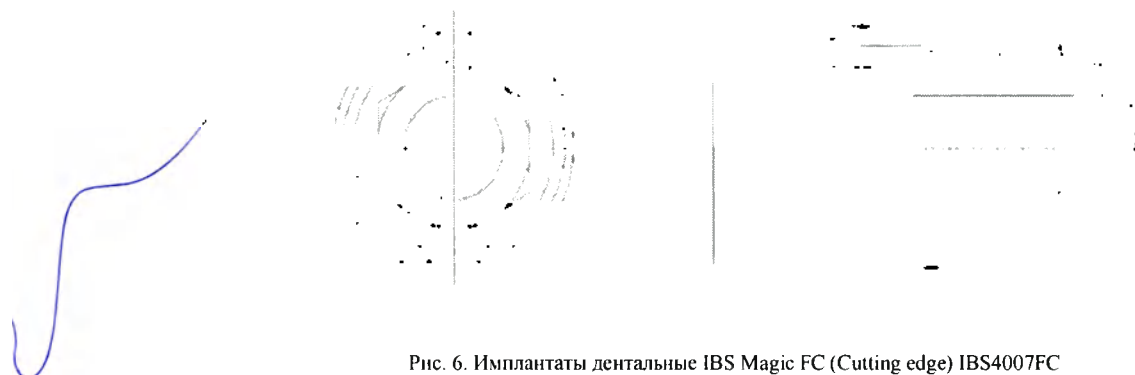


Рис. 6. Имплантаты дентальные IBS Magic FC (Cutting edge) IBS4007FC

Допустимое отклонение ± 0.05 мм

Шероховатость поверхности: обточка (0.4-0.8 мк)

Наружная резьба: макс. диаметр 4 ± 0.05 мм, мин. диаметр 2.62 ± 0.05 мм, шаг 1.15 ± 0.05 мм, метрическая

Внутренняя резьба: диаметр 2.00 ± 0.05 мм, шаг 0.4 ± 0.05 мм, метрическая

№	именование	Артикул (код для заказа)	Диаметр D, мм (±1%)	Длина L, мм (±1%)	Длина имплантации L1, мм (±1%)	Расстояние P, мм (±1%)	Главная часть (гексагональ- ный) Н (±0.05 мм)	Масса, г (±0,05 г)
5.	Имплантаты дентальные IBS Magic FC (Cutting edge)	IBS4007FC	4.0	7	7	1.15	2.5	1,41
		IBS4009FC	4.0	9	9	1.15	2.5	1,64
		IBS4011FC	4.0	11	11	1.15	2.5	1,65
		IBS4013FC	4.0	13	13	1.15	2.5	1,75
		IBS4015FC	4.0	15	15	1.15	2.5	1,75
		IBS4507FC	4.5	7	7	1.15	2.5	1,75
		IBS4509FC	4.5	9	9	1.15	2.5	1,77
		IBS4511FC	4.5	11	11	1.15	2.5	1,77
		IBS4513FC	4.5	13	13	1.15	2.5	1,78
		IBS4515FC	4.5	15	15	1.15	2.5	1,81
		IBS5007FC	5.0	7	7	1.15	2.5	1,84
		IBS5009FC	5.0	9	9	1.15	2.5	1,78
		IBS5011FC	5.0	11	11	1.15	2.5	1,75
		IBS5013FC	5.0	13	13	1.15	2.5	1,77
		IBS5015FC	5.0	15	15	1.15	2.5	1,77
		IBS5507FC	5.5	7	7	1.15	2.5	0,50
		IBS5509FC	5.5	9	9	1.15	2.5	0,55
		IBS5511FC	5.5	11	11	1.15	2.5	0,32
		IBS5513FC	5.5	13	13	1.15	2.5	0,47

IBS6007FC	6.0	7	7	1.15	2.5	0,55
IBS6009FC	6.0	9	9	1.15	2.5	0,66
IBS6011FC	6.0	11	11	1.15	2.5	0,67
IBS6013FC	6.0	13	13	1.15	2.5	0,68
IBS6015FC	6.0	15	15	1.15	2.5	1,96
IBS6507FC	6.5	7	7	1.15	2.5	1,98
IBS6509FC	6.5	9	9	1.15	2.5	1,98
IBS6511FC	6.5	11	11	1.15	2.5	1,99
IBS6513FC	6.5	13	13	1.15	2.5	0,28
IBS6515FC	6.5	15	15	1.15	2.5	0,30

Таблица 2. 1. Технические характеристики принадлежности

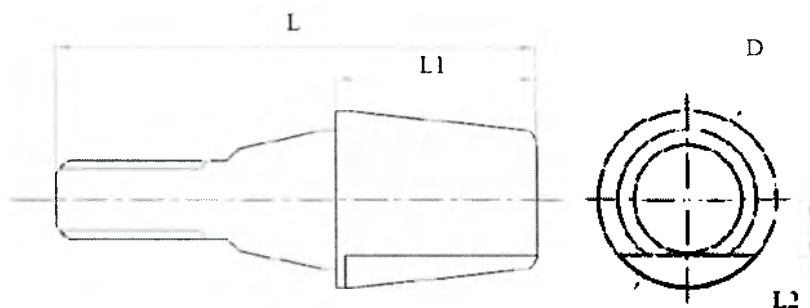


Рис. 7. Абатмент Magicore
Допустимое отклонение ± 0.05 мм
Наружняя резьба: диаметр 1.6 ± 0.05 мм, шаг 0.35 ± 0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Длина L, мм ($\pm 1\%$)	Длина имплантации L1, мм ($\pm 1\%$)	Длина обработки поверхности L2, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
1.	Абатмент Magicore	MA4502	3.5	7.6	2	1.1	1,77
		MA4503	3.5	8.6	3	1.1	1,78
		MA4504	3.5	9.6	4	1.1	1,81
		MA4505	3.5	10.6	5	1.1	1,84
		MA4506	3.5	11.6	6	1.1	1,78
		MA5002	3.86	7.6	2	1.1	1,81
		MA5003	3.86	8.6	3	1.1	1,88
		MA5004	3.86	9.6	4	1.1	1,89
		MA5005	3.86	10.6	5	1.1	1,90
		MA5006	3.86	11.6	6	1.1	1,91
		MA5002	4.3	7.6	2	1.55	1,93
		MA5503	4.3	8.6	3	1.55	1,95
		MA5504	4.3	9.6	4	1.55	1,75
		MA5505	4.3	10.6	5	1.55	1,77
		MA5506	4.3	11.6	6	1.55	1,77
		MA6002	4.6	7.6	2	1.55	1,77
		MA6003	4.6	8.6	3	1.55	1,77
		MA6004	4.6	9.6	4	1.55	1,78
		MA6005	4.6	10.6	5	1.55	1,64
		MA6006	4.6	11.6	6	1.55	1,65

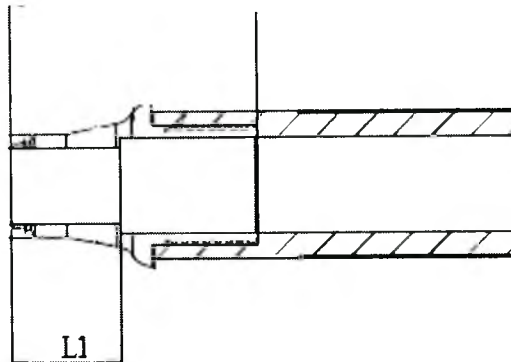
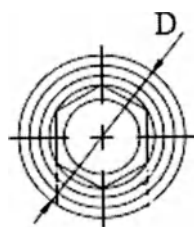


Рис. 8. Абатмент UCLA, Абатмент пластиковый UCLA
Допустимое отклонение: менее 6 мм ± 0.05 мм, выше 6 мм ± 0.1 мм
Диаметр резьбы $= 2.00 \pm 0.05$ мм, шаг $= 0.4 \pm 0.05$ мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Длина имплантации L1, мм ($\pm 1\%$)	Длина абатмента L, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
2.	Абатмент UCLA	FUCH3501	3.5	1	6.8	1.41
		FUCH3502	3.5	2	7.8	1.64
		FUCH3503	3.5	3	8.8	1.65
		FUCH3504	3.5	4	9.8	1.75
		FUCH4001	4	1	6.8	1.75
		FUCH4002	4	2	7.8	1.77

		FUCH4003	4	3	8.8	1.64
		FUCH4004	4	4	9.8	1.65
		FUCH4501	4.5	1	6.8	1.75
		FUCH4502	4.5	2	7.8	1.75
		FUCH4503	4.5	3	8.8	1.75
		FUCH4504	4.5	4	9.8	1.77
		FUCH5001	5	1	6.8	1.77
		FUCH5002	5	2	7.8	1.77
		FUCH5003	5	3	8.8	1.77
		FUCH5004	5	4	9.8	1.77
		FUCH5501	5.5	1	6.8	1.78
		FUCH5502	5.5	2	7.8	1.41
		FUCH5503	5.5	3	8.8	1.41
		FUCH5504	5.5	4	9.8	1.64
		FUCN3501	3.5	1	6.8	1.41
		FUCN3502	3.5	2	7.8	1.64
		FUCN3503	3.5	3	8.8	1.65
		FUCN3504	3.5	4	9.8	1.75
		FUCN4001	4	1	6.8	1.75
		FUCN4002	4	2	7.8	1.77
		FUCN4003	4	3	8.8	1.64
		FUCN4004	4	4	9.8	1.65
		FUCN4501	4.5	1	6.8	1.75
		FUCN4502	4.5	2	7.8	1.75
		FUCN4503	4.5	3	8.8	1.75
		FUCN4504	4.5	4	9.8	1.77
		FUCN5001	5	1	6.8	1.77
		FUCN5002	5	2	7.8	1.77

		FUCN5004	5	4	9.8	1,77
		FUCN5501	5.5	1	6.8	1,78
		FUCN5502	5.5	2	7.8	1,41
		FUCN5503	5.5	3	8.8	1,41
		FUCN5504	5.5	4	9.8	1,64
3.	Абатмент пластиковый UCLA	FUPH3501	3.5	1	6.8	1,65
		FUPH3502	3.5	2	7.8	1,75
		FUPH3503	3.5	3	8.8	1,75
		FUPH3504	3.5	4	9.8	0,28
		FUPH4001	4	1	6.8	0,30
		FUPH4002	4	2	7.8	0,38
		FUPH4003	4	3	8.8	0,42
		FUPH4004	4	4	9.8	0,50
		FUPH4501	4.5	1	6.8	0,55
		FUPH4502	4.5	2	7.8	0,32
		FUPH4503	4.5	3	8.8	0,47
		FUPH4504	4.5	4	9.8	0,55
		FUPH5001	5	1	6.8	0,65
		FUPH5002	5	2	7.8	1,75
		FUPH5003	5	3	8.8	0,67
		FUPH5004	5	4	9.8	1,64
		FUPH5501	5.5	1	6.8	1,65
		FUPH5502	5.5	2	7.8	1,75
		FUPH5503	5.5	3	8.8	1,76
		FUPH5504	5.5	4	9.8	1,77

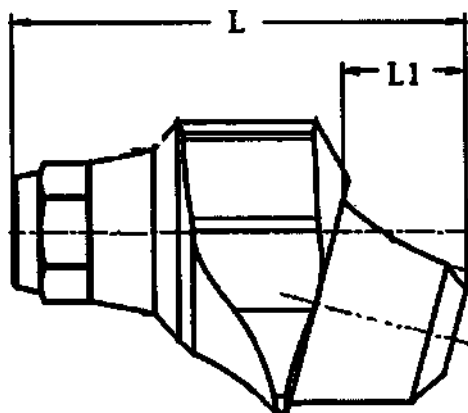
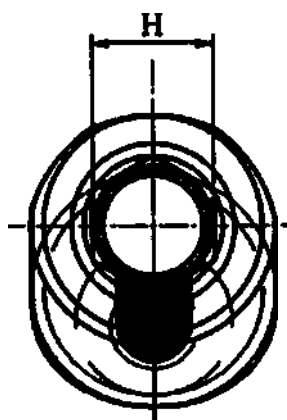
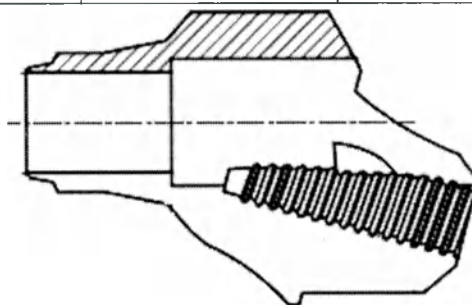


Рис. 9 Абатмент мультипоинт
Шерховатость поверхности: обточка (0,4-0,8мк)
Допустимое отклонение ± 0.05 мм
Внутренняя резьба: диаметр 1.4 ± 0.05 мм, шаг 0.3 ± 0.05 мм, метрическая

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Высота манжеты L1, мм	Длина абатмента L, мм ($\pm 1\%$)	Гексагональный H, мм (± 0.05 мм)	Масса, г (± 0.05 г)
4.	Абатмент мультипоинт	FMH351060	1	6		0,65

№ п/п	Наименование	Л1, мм	ММ (±1%)	(±0.05мм)
	FMH352070	2	7	1,75
	FMH353080	3	8	1,75
	FMH354090	4	9	1,77
	FMH355100	5	10	1,78
	FMH351061	1	6	1,79

		FMH351071	1	7	2.5	1,64
		FMH351081	1	8		1,65
		FMH351091	1	9		1,75
		FMH351101	1	10		1,75
		FMH352071	2	7		0,65
		FMH352081	2	8		0,66
		FMH352091	2	9		0,66
		FMH352101	2	10		1,75
		FMH353111	2	11		1,64
		FMH353081	3	8		1,65
		FMH353091	3	9		1,75
		FMH353101	3	10		1,75
		FMH353111	3	11		0,65
		FMH353121	3	12		0,66
		FMH354091	4	9		0,66
		FMH354101	4	10		0,67
		FMH354111	4	11		1,64
		FMH354121	4	12		1,65
		FMH354131	4	13		1,75
		FMH355101	5	10		1,64
		FMH355111	5	11		1,65
		FMH355121	5	12		1,75
		FMH355131	5	13		1,75
		FMH355141	5	14		0,65
		FMH352073	2	7		0,66
		FMH352083	2	8		0,66
		FMH352093	2	9		1,78
		FMH352103	2	10		1,41
		FMH353113	2	11		1,65
		FMH353083	3	8		1,75
		FMH353093	3	9	1,77	

	FMH353103	3	10	1,78
	FMH353113	3	11	1,78
	FMH353123	3	12	1,41
	FMH354093	4	9	0,42
	FMH354103	4	10	0,50
	FMH354113	4	11	0,55
	FMH354123	4	12	0,32
	FMH354133	4	13	1,65
	FMH355103	5	10	1,75
	FMH355113	5	11	1,76
	FMH355123	5	12	1,77
	FMH355133	5	13	1,77

		FMH401060	1	6	1,65
		FMH402070	2	7	1,75
		FMH403080	3	8	1,77
		FMH404090	4	9	1,77
		FMH405100	5	10	1,78
		FMH401061	1	6	1,78
		FMH401071	1	7	1,41
		FMH401081	1	8	0,42
		FMH401091	1	9	0,50
		FMH401101	1	10	0,55
		FMH402071	2	7	0,42
		FMH402081	2	8	0,50
		FMH402091	2	9	0,55
		FMH402101	2	10	0,32
		FMH403111	2	11	1,65
		FMH403081	3	8	1,78
		FMH403091	3	9	1,41
		FMH403101	3	10	0,42

		FMH403111	3	11	1,78
		FMH403121	3	12	1,78
		FMH404091	4	9	1,41
		FMH404101	4	10	0,42
		FMH404111	4	11	0,50
		FMH404121	4	12	1,78
		FMH404131	4	13	1,41
		FMH405101	5	10	0,42
		FMH405111	5	11	0,50
		FMH405121	5	12	0,55
		FMH405131	5	13	1,78
		FMH405141	5	14	1,41
		FMH402073	2	7	1,78
		FMH402083	2	8	1,41
		FMH402093	2	9	0,42
		FMH402103	2	10	0,50
		FMH403113	2	11	0,55
		FMH403083	3	8	1,78
		FMH403093	3	9	1,78
		FMH403103	3	10	1,41
		FMH403113	3	11	0,42
		FMH403123	3	12	0,50
		FMH404093	4	9	0,55
		FMH404103	4	10	0,55
		FMH404113	4	11	0,32
		FMH404123	4	12	1,65
		FMH404133	4	13	1,75
		FMH405103	5	10	1,77
		FMH405113	5	11	1,65
		FMH405123	5	12	1,75
		FMH405133	5	13	1,77

		FMH405143	5	14	1,75
		FMH451060	1	6	1,78
		FMH452070	2	7	1,78

	FMH454590	4	9	0,42
	FMH455100	5	10	0,50
	FMH451061	1	6	0,30
	FMH451071	1	7	0,38
	FMH451081	1	8	0,42
	FMH451091	1	9	0,50
	FMH451101	1	10	0,55
	FMH452071	2	7	0,32
	FMH452081	2	8	1,65
	FMH452091	2	9	1,75
	FMH452101	2	10	1,77
	FMH453111	2	11	1,77
	FMH453081	3	8	1,78
	FMH453091	3	9	1,78
	FMH453101	3	10	1,41
	FMH453111	3	11	0,42
	FMH453121	3	12	0,50
	FMH454591	4	9	0,55
	FMH454101	4	10	0,32
	FMH454111	4	11	1,65
	FMH454121	4	12	1,75
	FMH454131	4	13	1,77
	FMH455101	5	10	1,77
	FMH455111	5	11	1,78
	FMH455121	5	12	1,78
	FMH455131	5	13	1,41
	FMH455141	5	14	0,42

	FMH452073	2	7	1,41
	FMH452083	2	8	1,41
	FMH452093	2	9	1,64
	FMH452103	2	10	1,65
	FMH453113	2	11	1,75
	FMH453083	3	8	1,77
	FMH453093	3	9	1,77
	FMH453103	3	10	1,78
	FMH453113	3	11	1,41
	FMH453123	3	12	1,75
	FMH454593	4	9	0,30
	FMH454103	4	10	0,38
	FMH454113	4	11	0,42
	FMH454123	4	12	0,50
	FMH454133	4	13	1,64
	FMH455103	5	10	1,65
	FMH455113	5	11	1,77
	FMH455123	5	12	1,78
	FMH455133	5	13	1,41
	FMH455143	5	14	1,65
	FMH501060	1	6	1,77
	FMH502070	2	7	1,77
	FMH503080	3	8	1,78
	FMH505090	4	9	1,41
	FMH505100	5	10	1,75
	FMH501061	1	6	1,77
	FMH501071	1	7	1,78
	FMH501081	1	8	1,41
	FMH501091	1	9	1,65
	FMH501101	1	10	1,75
	FMH502071	2	7	1,77

	FMH502081	2	8	0,32
	FMH502091	2	9	1,65

	FMH502101	2	10	1,75
	FMH503111	2	11	1,77
	FMH503081	3	8	1,77
	FMH503091	3	9	1,78
	FMH503101	3	10	1,78
	FMH503111	3	11	1,41
	FMH503121	3	12	0,42
	FMH505091	4	9	0,50
	FMH504101	4	10	0,55
	FMH504111	4	11	0,32
	FMH504121	4	12	1,65
	FMH504131	4	13	1,64
	FMH505101	5	10	1,65
	FMH505111	5	11	1,75
	FMH505121	5	12	1,76
	FMH505131	5	13	1,76
	FMH505141	5	14	1,77
	FMH502073	2	7	1,65
	FMH502083	2	8	1,75
	FMH502093	2	9	1,77
	FMH502103	2	10	1,77
	FMH503113	2	11	1,78
	FMH503083	3	8	1,41
	FMH503093	3	9	0,32
	FMH503103	3	10	1,65
	FMH503113	3	11	1,64
	FMH503123	3	12	1,65
	FMH505093	4	9	1,75
	FMH504103	4	10	1,76

	FMH504113	4	11	0,42
	FMH504123	4	12	0,50
	FMH504133	4	13	0,55
	FMH505103	5	10	0,32
	FMH505113	5	11	1,65
	FMH505123	5	12	1,75
	FMH505133	5	13	0,32
	FMH505143	5	14	1,65
	FMH551060	1	6	1,65
	FMH552070	2	7	1,75
	FMH553080	3	8	1,76
	FMH555590	4	9	1,77
	FMH555100	5	10	1,77
	FMH551061	1	6	1,78
	FMH551071	1	7	1,41
	FMH551081	1	8	0,42
	FMH551091	1	9	0,50
	FMH551101	1	10	0,55
	FMH552071	2	7	0,32
	FMH552081	2	8	1,65
	FMH552091	2	9	1,75
	FMH552101	2	10	1,76
	FMH553111	2	11	1,77
	FMH553081	3	8	1,77
	FMH553091	3	9	1,78
	FMH553101	3	10	1,65
	FMH553111	3	11	1,75
	FMH553121	3	12	1,77
	FMH555591	4	9	1,77
	FMH554101	4	10	1,75

	FMH554111	4	11	1,77
--	-----------	---	----	------

	FMH554121	4	12	1,78
	FMH554131	4	13	1,41
	FMH555593	5	10	0,42
	FMH555101	5	11	0,50
	FMH555111	5	12	0,55
	FMH555121	5	13	0,32
	FMH555131	5	14	1,65
	FMH555141	2	7	1,75
	FMH552073	2	8	1,76
	FMH552083	2	9	1,77
	FMH552093	2	10	1,77
	FMH552103	2	11	1,78
	FMH553113	3	8	1,78
	FMH553083	3	9	1,41
	FMH553093	3	10	0,42
	FMH553103	3	11	0,50
	FMH553113	3	12	0,55
	FMH553123	4	9	0,32
	FMH554103	4	10	1,65
	FMH554113	4	11	1,75
	FMH554123	4	12	1,76
	FMH554133	4	13	1,77
	FMH555103	5	10	1,77
	FMH555113	5	11	1,78
	FMH555123	5	12	1,65
	FMH555133	5	13	1,75
	FMH555143	5	14	1,77
	FMH601060	1	6	1,77
	FMH602070	2	7	1,75
	FMH603080	3	8	1,78
	FMH606090	4	9	1,41

	FMH605100	5	10	1,78
	FMH601061	1	6	1,41
	FMH601071	1	7	0,42
	FMH601081	1	8	0,50
	FMH601091	1	9	0,55
	FMH601101	1	10	1,78
	FMH602071	2	7	1,78
	FMH602081	2	8	1,41
	FMH602091	2	9	0,42
	FMH602101	2	10	0,50
	FMH603111	2	11	0,55
	FMH603081	3	8	0,55
	FMH603091	3	9	0,32
	FMH603101	3	10	1,78
	FMH603111	3	11	1,41
	FMH603121	3	12	0,42
	FMH606091	4	9	0,50
	FMH604101	4	10	0,55
	FMH604111	4	11	0,42
	FMH604121	4	12	0,50
	FMH604131	4	13	0,55
	FMH605101	5	10	0,32
	FMH605111	5	11	1,65
	FMH605121	5	12	1,75
	FMH605131	5	13	0,42
	FMH605141	5	14	1,75

		FMH602073	2	7	0,42
		FMH602083	2	8	0,50
		FMH602093	2	9	0,55
		FMH602103	2	10	0,32
		FMH603113	2	11	1,65
		FMH603083	3	8	1,75
		FMH603093	3	9	0,42
		FMH603103	3	10	0,50
		FMH603113	3	11	0,55
		FMH603123	3	12	0,32
		FMH606093	4	9	1,65
		FMH604103	4	10	1,75
		FMH604113	4	11	0,50
		FMH604123	4	12	0,44
		FMH604133	4	13	0,44
		FMH605103	5	10	0,57
		FMH605113	5	11	0,69
		FMH605123	5	12	0,81
		FMH605133	5	13	0,93
		FMH605143	5	14	1,31

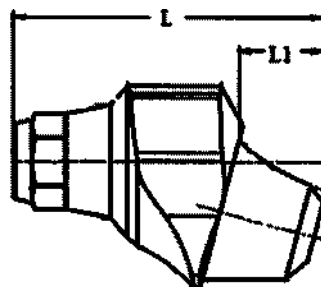
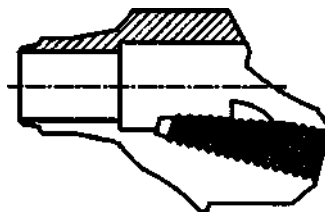


Рис. 10 Абатмент мультиточный
Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение=±0.05мм
Внутренняя резьба: диаметр=1.4±0.05 мм, шаг=0.3±0.05 мм, метрическая

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Высота манжеты L1, мм (±1%)	Длина L, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
	Абатмент	FMN351060	1	6	1,78
		FMN352070	2	7	1,41
		FMN353080	3	8	0,42
		FMN354090	4	9	0,50
		FMN355100	5	10	0,55
		FMN351061	1	6	0,42
		FMN351071	1	7	0,50
		FMN351081	1	8	0,55
		FMN351091	1	9	0,32
		FMN351101	1	10	1,65
		FMN352071	2	7	1,65
		FMN352081	2	8	1,75
		FMN352091	2	9	0,42
		FMN352101	2	10	0,50

	FMN353111	2	11	0,55
	FMN353081	3	8	0,42
	FMN353091	3	9	0,50
	FMN353101	3	10	0,55
	FMN353111	3	11	0,32
	FMN353121	3	12	1,65
	FMN354091	4	9	1,75
	FMN354101	4	10	0,42
	FMN354111	4	11	0,50
	FMN354121	4	12	0,55
	FMN354131	4	13	0,32
	FMN355101	5	10	1,65
	FMN355111	5	11	1,75
	FMN355121	5	12	0,50
	FMN355131	5	13	0,55
	FMN355141	5	14	0,32
	FMN352073	2	7	0,55
	FMN352083	2	8	0,32
	FMN352093	2	9	1,65
	FMN352103	2	10	1,75
	FMN352103	2	11	0,42
	FMN353083	3	8	0,50
	FMN353093	3	9	0,55
	FMN353103	3	10	0,32
	FMN353113	3	11	1,65
	FMN353123	3	12	1,75
	FMN354093	4	9	0,42
	FMN354103	4	10	0,50
	FMN354113	4	11	0,55
	FMN354123	4	12	1,78

	FMN354133	4	13	1,41
	FMN355103	5	10	0,42
	FMN355113	5	11	0,50
	FMN355123	5	12	0,55
	FMN355133	5	13	0,55
	FMN355143	5	14	0,32
	FMN401060	1	6	1,65
	FMN402070	2	7	0,32
	FMN403080	3	8	1,65
	FMN404090	4	9	1,75
	FMN405100	5	10	0,42
	FMN401061	1	6	1,78
	FMN401071	1	7	1,41
	FMN401081	1	8	0,42
	FMN401091	1	9	0,50
	FMN401101	1	10	0,55
	FMN402071	2	7	0,42
	FMN402081	2	8	0,50
	FMN402091	2	9	0,55
	FMN402101	2	10	0,32
	FMN403111	2	11	1,65
	FMN403081	3	8	1,75
	FMN403091	3	9	0,42
	FMN403101	3	10	0,50
	FMN403111	3	11	0,55
	FMN403121	3	12	0,42
	FMN404091	4	9	0,50
	FMN404101	4	10	0,55
	FMN404111	4	11	0,32

		FMN404131	4	13	1,65
		FMN405101	5	10	1,75

		FMN405111	5	11	1,77
		FMN405121	5	12	1,77
		FMN405131	5	13	1,78
		FMN405141	5	14	1,78
		FMN402073	2	7	1,78
		FMN402083	2	8	1,41
		FMN402093	2	9	0,42
		FMN402103	2	10	0,50
		FMN403113	2	11	0,55
		FMN403083	3	8	1,78
		FMN403093	3	9	1,41
		FMN403103	3	10	0,42
		FMN403113	3	11	0,50
		FMN403123	3	12	0,55
		FMN404093	4	9	0,32
		FMN404103	4	10	1,65
		FMN404113	4	11	1,41
		FMN404123	4	12	0,42
		FMN404133	4	13	1,78
		FMN405103	5	10	1,41
		FMN405113	5	11	0,42
		FMN405123	5	12	0,50
		FMN405133	5	13	0,55
		FMN405143	5	14	0,32
		FMN451060	1	6	1,65
		FMN452070	2	7	1,41
		FMN453080	3	8	0,42
		FMN454590	4	9	0,50
		FMN455100	5	10	0,55
		FMN451061	1	6	1,78
		FMN451071	1	7	1,78

	FMN451091	1	9	1,41
	FMN451101	1	10	0,42
	FMN452071	2	7	0,50
	FMN452081	2	8	0,55
	FMN452091	2	9	1,78
	FMN452101	2	10	1,41
	FMN453111	2	11	0,42
	FMN453081	3	8	0,50
	FMN453091	3	9	0,55
	FMN453101	3	10	0,32
	FMN453111	3	11	1,65
	FMN453121	3	12	1,41
	FMN454591	4	9	0,42
	FMN454101	4	10	1,78
	FMN454111	4	11	1,41
	FMN454121	4	12	0,42
	FMN454131	4	13	0,50
	FMN455101	5	10	0,55
	FMN455111	5	11	0,32
	FMN455121	5	12	1,65
	FMN455131	5	13	1,65
	FMN455141	5	14	1,41
	FMN452073	2	7	0,50
	FMN452083	2	8	0,55
	FMN452093	2	9	1,78
	FMN452103	2	10	1,78
	FMN453113	2	11	1,41
	FMN453083	3	8	0,42
	FMN453093	3	9	0,50
	FMN453103	3	10	0,55

	FMN453113	3	11	1,41
	FMN453123	3	12	0,42
	FMN454593	4	9	0,50
	FMN454103	4	10	0,55
	FMN454113	4	11	1,78
	FMN454123	4	12	1,41
	FMN454133	4	13	0,42
	FMN455103	5	10	0,50
	FMN455113	5	11	0,55
	FMN455123	5	12	0,32
	FMN455133	5	13	1,65
	FMN455143	5	14	1,41
	FMN501060	1	6	0,42
	FMN502070	2	7	0,50
	FMN503080	3	8	0,55
	FMN505090	4	9	1,78
	FMN505100	5	10	1,78
	FMN501061	1	6	1,78
	FMN501071	1	7	1,78
	FMN501081	1	8	1,41
	FMN501091	1	9	0,42
	FMN501101	1	10	0,50
	FMN502071	2	7	0,55
	FMN502081	2	8	1,41

	FMN502091	2	9	1,78
	FMN502101	2	10	1,41
	FMN503111	2	11	0,42
	FMN503081	3	8	0,50
	FMN503091	3	9	0,55
	FMN503101	3	10	1,78
	FMN503111	3	11	1,78

	FMN503121	3	12	1,41
	FMN505091	4	9	0,42
	FMN504101	4	10	0,50
	FMN504111	4	11	1,41
	FMN504121	4	12	1,78
	FMN504131	4	13	1,41
	FMN505101	5	10	0,42
	FMN505111	5	11	0,50
	FMN505121	5	12	0,50
	FMN505131	5	13	0,55
	FMN505141	5	14	0,32
	FMN502073	2	7	1,65
	FMN502083	2	8	1,75
	FMN502093	2	9	1,77
	FMN502103	2	10	1,77
	FMN503113	2	11	1,78
	FMN503083	3	8	1,78
	FMN503093	3	9	1,41
	FMN503103	3	10	0,42
	FMN503113	3	11	0,50
	FMN503123	3	12	0,55
	FMN505093	4	9	0,42
	FMN504103	4	10	0,50
	FMN504113	4	11	0,55
	FMN504123	4	12	0,32
	FMN504133	4	13	1,65
	FMN505103	5	10	1,75
	FMN505113	5	11	1,77
	FMN505123	5	12	1,77
	FMN505133	5	13	1,78
	FMN505143	5	14	1,41

	FMN551060	1	6	0,30
	FMN552070	2	7	0,38
	FMN553080	3	8	0,42
	FMN555590	4	9	0,50
	FMN555100	5	10	0,55
	FMN551061	1	6	0,32
	FMN551071	1	7	1,65
	FMN551081	1	8	1,75
	FMN551091	1	9	1,77
	FMN551101	1	10	1,77
	FMN552071	2	7	1,78
	FMN552081	2	8	1,78
	FMN552091	2	9	1,41
	FMN552101	2	10	0,42
	FMN553111	2	11	0,50
	FMN553081	3	8	0,55
	FMN553091	3	9	0,32
	FMN553101	3	10	1,65
	FMN553111	3	11	1,75
	FMN553121	3	12	1,77
	FMN555591	4	9	1,77

	FMN554101	4	10	1,78
	FMN554111	4	11	1,78
	FMN554121	4	12	1,41
	FMN554131	4	13	0,42
	FMN555101	5	10	0,50
	FMN555111	5	11	1,78
	FMN555121	5	12	1,41
	FMN555131	5	13	0,42
	FMN555141	5	14	1,78
	FMN552073	2	7	1,41

	FMN552083	2	8	1,64
	FMN552093	2	9	1,65
	FMN552103	2	10	1,75
	FMN553113	2	11	1,77
	FMN553083	3	8	1,77
	FMN553093	3	9	1,78
	FMN553103	3	10	1,41
	FMN553113	3	11	1,65
	FMN553123	3	12	1,75
	FMN555593	4	9	1,77
	FMN554103	4	10	1,77
	FMN554113	4	11	1,78
	FMN554123	4	12	1,78
	FMN554133	4	13	1,41
	FMN555103	5	10	0,65
	FMN555113	5	11	1,75
	FMN555123	5	12	1,75
	FMN555133	5	13	1,77
	FMN555143	5	14	1,78
	FMN601060	1	6	1,41
	FMN602070	2	7	1,75
	FMN603080	3	8	1,75
	FMN606090	4	9	1,64
	FMN605100	5	10	1,65
	FMN601061	1	6	1,75
	FMN601071	1	7	1,75
	FMN601081	1	8	0,65
	FMN601091	1	9	0,66
	FMN601101	1	10	0,66
	FMN602071	2	7	1,78
	FMN602081	2	8	1,41

	FMN602091	2	9	1,64
	FMN602101	2	10	1,65
	FMN603111	2	11	1,75
	FMN603081	3	8	1,75
	FMN603091	3	9	1,64
	FMN603101	3	10	1,65
	FMN603111	3	11	1,75
	FMN603121	3	12	1,75
	FMN606091	4	9	1,75
	FMN604101	4	10	1,77
	FMN604111	4	11	1,77
	FMN604121	4	12	1,77
	FMN604131	4	13	0,48
	FMN605101	5	10	0,55
	FMN605111	5	11	0,65
	FMN605121	5	12	0,66
	FMN605131	5	13	0,66
	FMN605141	5	14	0,67

	FMN602083	2	8	1,75
	FMN602093	2	9	1,75
	FMN602103	2	10	1,75
	FMN603113	2	11	1,77
	FMN603083	3	8	1,77
	FMN603093	3	9	1,78
	FMN603103	3	10	1,41
	FMN603113	3	11	1,41
	FMN603123	3	12	1,64
	FMN606093	4	9	1,65
	FMN604103	4	10	1,75
	FMN604113	4	11	1,75

	FMN604123	4	12	1,84
	FMN604133	4	13	1,78
	FMN605103	5	10	1,81
	FMN605113	5	11	1,88
	FMN605123	5	12	1,89
	FMN605133	5	13	1,91
	FMN605143	5	14	1,93

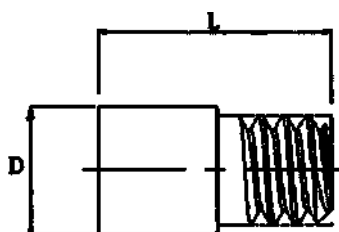


Рис. 11. Винт фиксирующий и колпачок для абатмента мультинонит

Допустимое отклонение: менее 6 мм ± 0.05 мм, выше 6 мм ± 0.1 мм

Наружная резьба: наружный диаметр резьбы $= 1.37^{+0.01}_{-0.01}$ мм, внутренний диаметр $= 1.0^{+0.01}_{-0.01}$ мм, шаг $= 0.3 \pm 0.05$ мм, угол резьбы $= 60^\circ \pm 0.05^\circ$, высота профиля $= 0.175 \pm 0.05$ мм, метрическая

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр колпачка/диаметр винта D, мм ($\pm 1\%$)	Высота колпачка/длина винта L, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г (± 0.05 г)
5.	Винт фиксирующий и колпачок для абатмента мультинонит	FMRS	2.5	4.4	0.38
		FMC35	3.6	4.3	0.42
		FMC40	4	4.3	0.50
		FMC45	4.5	4.3	0.55
		FMC50	5	4.3	0.32
		FMC55	5.5	4.3	0.47
		FMC60	6	4.3	0.55

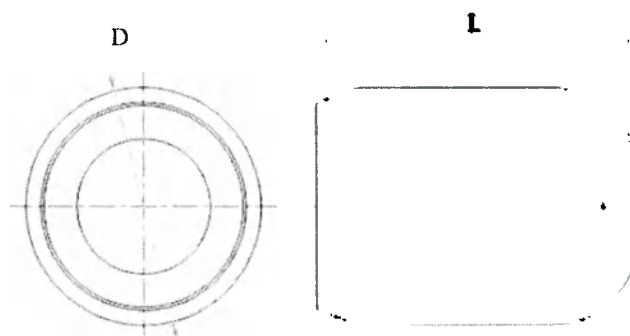


Рис. 12. Колпачок абатмента Magicore

Шероховатость поверхности: обточка (0.4-0.8 мк)

Допустимое отклонение ± 0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Длина L, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г (± 0.05 г)
---	--------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

6.

Колпачок выжигаемый
Magicore

MA4503C	ø5.5	6.5	0.30
MA4504C	ø5.5	7.5	0.38
MA4505C	ø5.5	8.5	0.42
MA4506C	ø5.5	9.5	0.50
MA5002C	ø6.0	5.5	0.55
MA5003C	ø6.0	6.5	0.32
MA5004C	ø6.0	7.5	0.47
MA5005C	ø6.0	8.5	0.55
MA5006C	ø6.0	9.5	0.65
MA5502C	ø6.5	5.5	0.66
MA5503C	ø6.5	6.5	0.67
MA5504C	ø6.5	7.5	0.68
MA5505C	ø6.5	8.5	0.52
MA5506C	ø6.5	9.5	0.59
MA6002C	ø7.0	5.5	0.35
MA6003C	ø7.0	6.5	0.45
MA6004C	ø7.0	7.5	0.55
MA6005C	ø7.0	8.5	0.65
MA6006C	ø7.0	9.5	0.76

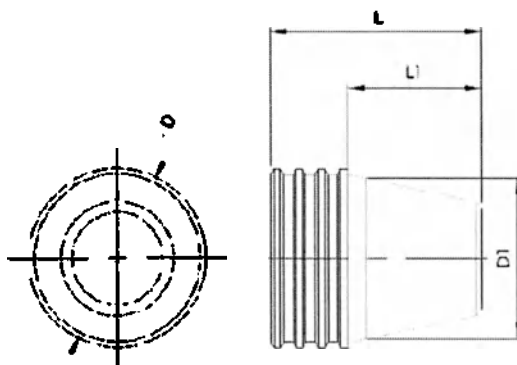
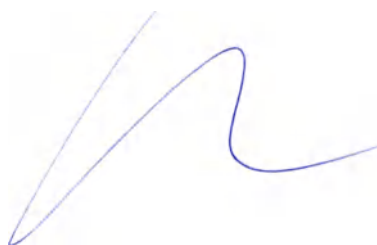


Рис. 13. Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) – винт основного типа не гексагональный
Шероховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение ± 0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Диаметр D1, мм ($\pm 1\%$)	Длина L, мм ($\pm 1\%$)	Длина L1, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
7.	Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) – винт основного типа не	MPSRM45B	3.2	2.89	3.8	2.4	1,31
		MPSRM50B	4	3.28	3.8	2.4	1,40
		MPSRM55B	4	3.28	3.8	2.4	1,41

	гексагональный	MPSRM60B	4.4	3.28	3.8	2.4	1,64
--	----------------	----------	-----	------	-----	-----	------

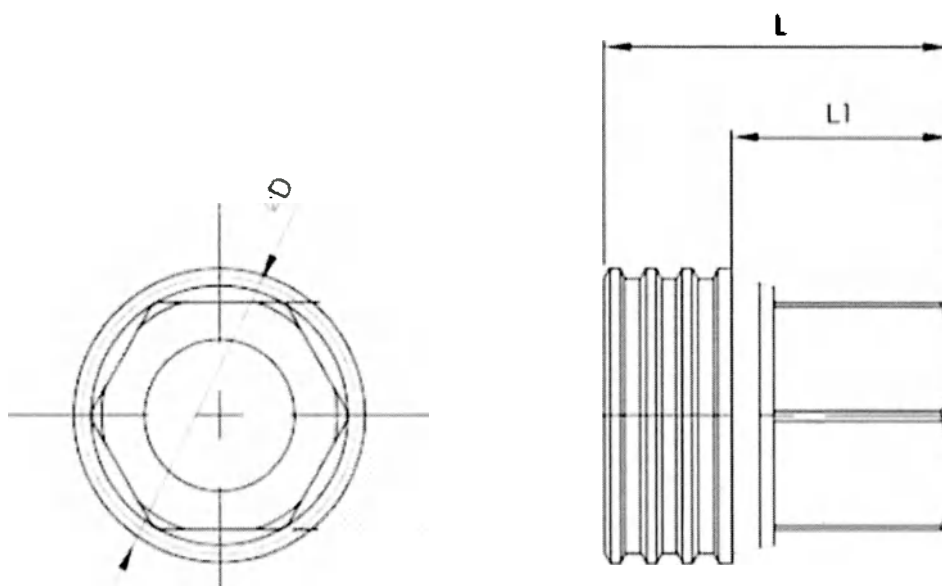


Рис. 14. Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) – винт основного типа гексагональный
Шероховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение ± 0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Длина L, мм ($\pm 1\%$)	Длина L1, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
---	--------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------

Основного типа гексагональный	MPSRM55S	4	3.8	2.4	1.64
	MPSRM60S	4	3.8	2.4	1.65
		4.4	3.8	2.4	1.75

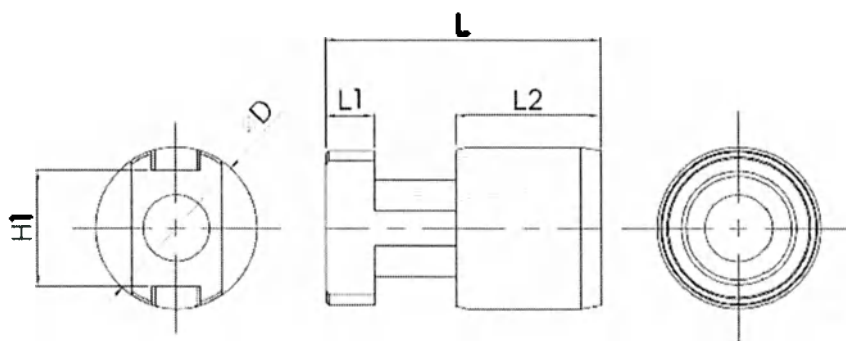


Рис. 15. Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией)
- колпачок
Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение=±0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм (±1%)	Главная часть H1, мм (±1%)	Длина L, мм (±1%)	Длина L1, мм (±1%)	Длина L2, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
9.	Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) - колпачок	MPBOC45	5	3.6	8.5	1.5	4.5	1,78
		MPBOC50	6	4.1	8.5	1.5	4.5	1,81
		MPBOC55	6	4.6	8.5	1.5	4.5	1,84
		MPBOC60	6.4	5	8.5	1.5	4.5	1,78

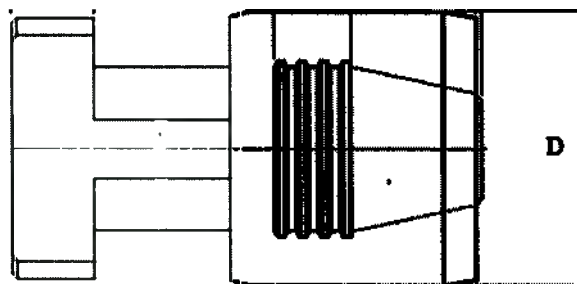


Рис. 16. Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) в наборе (колпачок и винт)
Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение=±0.05
Длина колпачка = 8.5±0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр колпачка D, мм (±1%)	Тип	Масса, г (±0,05 г)
10.	Колпачок выжигаемый (с винтовой фиксацией) в наборе (колпачок и винт)	MPSR45B	4.5	Не гексагональный	0,45
		MPSR50B	5.0		0,55
		MPSR55B	5.5		0,65
		MPSR60B	6.0		0,76
		MPSR45S	4.5	Гексагональный	0,44
		MPSR50S	5.0		0,57
		MPSR55S	5.5		0,69
		MPSR60S	6.0		0,81

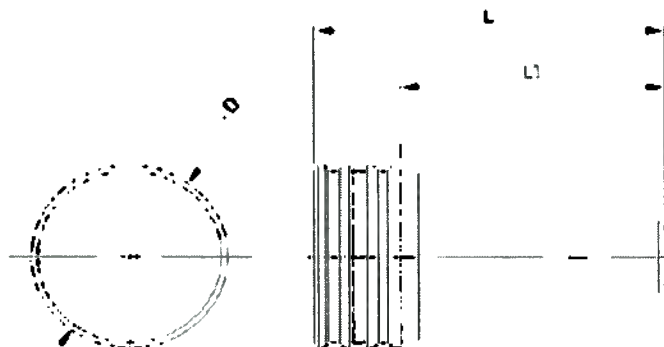


Рис. 17. Колпачок выжигаемый (с фиксацией на цемент) – колпачок (основной тип, не гексагональный)
Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)

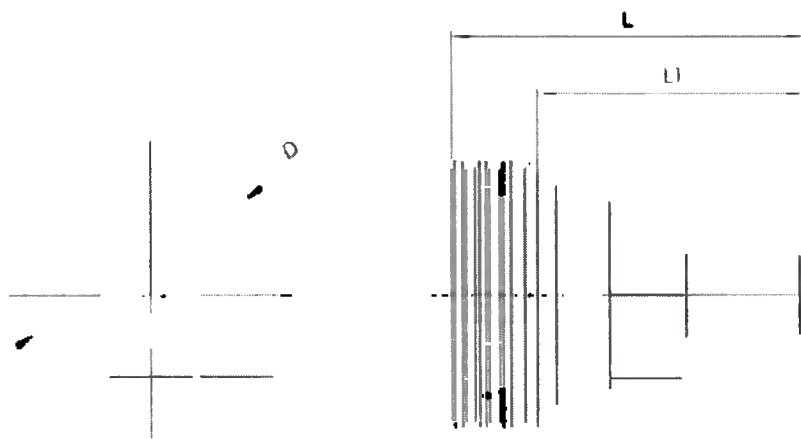


Рис. 18. Колпачок выжигаемый (с фиксацией на цемент) – колпачок (основной тип, гексагональный)
Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение ± 0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Длина L, мм ($\pm 1\%$)	Длина L1, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
11.	Колпачок выжигаемый (с фиксацией на цемент) – колпачок (основной тип, не	MPCM45B	3.2	5.7	4.3	1.31
		MPCM50B	4	5.7	4.3	1.40
		MPCM55B	4	5.7	4.3	1.41
		MPCM60B	4.4	5.7	4.3	1.41
12.	Колпачок выжигаемый (с фиксацией на цемент) – колпачок (основной тип, гексагональный)	MPCM45S	3.2	5.7	4.3	1.64
		MPCM50S	4	5.7	4.3	1.65
		MPCM55S	4	5.7	4.3	1.75
		MPCM60S	4.4	5.7	4.3	1.77

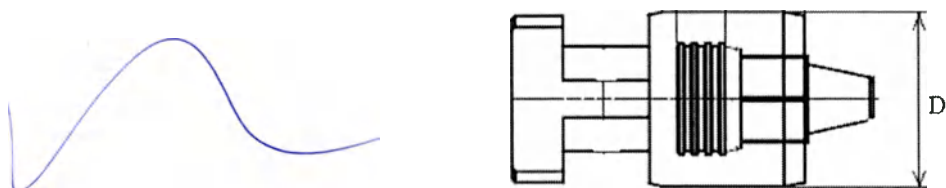


Рис. 19. Колпачок выжигаемый (с фиксацией на цемент)
Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение ± 0.05 мм
Длина колпачка = 8.5 ± 0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр колпачка D, мм ($\pm 1\%$)	Тип	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
13.	Колпачок выжигаемый (с фиксацией на	MPLP45S	4.5	Гексагональный	1,78
		MPLP55S	5.5		1,81
		MPLP45B	4.5		1,84
	цемент)	MPLP55B	5.5	Не гексагональный	1,85
		MPLP50B	5.0		1,83
		MPLP60B	6.0		1,86

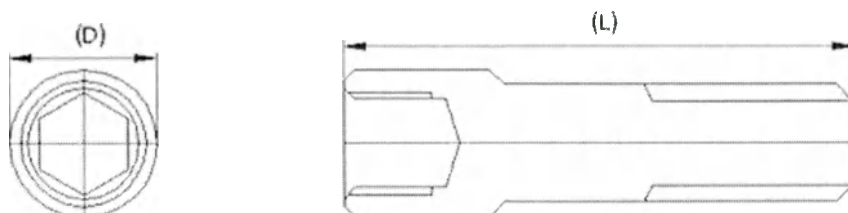


Рис. 20. Колпачок выжигаемый винтовой
Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение ± 0.05 мм
Наружная резьба: диаметр = 1.6 ± 0.05 мм, шаг = 0.35 ± 0.05 мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм (±1%)	Длина L, мм (±1%)	Масса, г (±0,05 г)
14.	Колпачок выжигаемый винтовой	MPCS	7	3	1,31

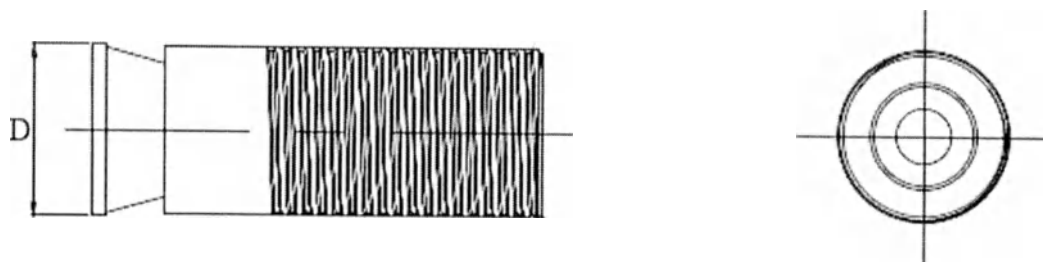


Рис. 21. Цилиндр ССМ

Допустимое отклонение: менее 6 мм ± 0.05 мм, выше 6 мм ± 0.1 мм

Наружная резьба: шаг $= 0.3 \pm 0.05$ мм, высота профиля $= 0.15 \pm 0.05$ мм

Длина цилиндра $= 11.9 \pm 0.01$ мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр цилиндра D, мм (±1%)	Тип	Масса, г (±0,05 г)
15.	Цилиндр ССМ	ССН35	3.6	Гексагональный	0,93
		ССН35		Не гексагональный	0,93
		ССН40	4	Гексагональный	1,31
		ССН40		Не гексагональный	1,31
		ССН45	4.5	Гексагональный	1,41
		ССН45		Не гексагональный	1,41
		ССН50	5	Гексагональный	1,64
		ССН50		Не гексагональный	1,64
		ССН55	5.5	Гексагональный	1,75
		ССН55		Не гексагональный	1,75
		ССН60	6	Гексагональный	1,78
		ССН60		Не гексагональный	1,78

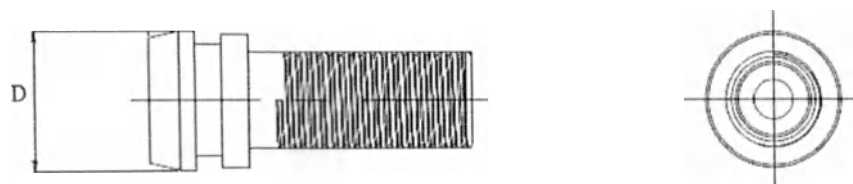


Рис. 22. Цилиндр временный

Допустимое отклонение: менее 6 мм ± 0.05 мм, выше 6 мм ± 0.1 мм

Наружная резьба: шаг $= 0.3 \pm 0.05$ мм, высота профиля $= 0.15 \pm 0.05$ мм

Длина цилиндра $= 12 \pm 0.01$ мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр цилиндра D, мм (±1%)	Тип	Масса, г (±0,05 г)
16.	Цилиндр временный	ТСН35	3.6	Гексагональный	0,88
		ТСН35		Не гексагональный	0,88
		ТСН40	4	Гексагональный	1,02
		ТСН40		Не гексагональный	1,02
		ТСН45	4.5	Гексагональный	1,10
		ТСН45		Не гексагональный	1,10
		ТСН50	5	Гексагональный	1,12
		ТСН50		Не гексагональный	1,12
		ТСН55	5.5	Гексагональный	1,20
		ТСН55		Не гексагональный	1,20
		ТСН60	6	Гексагональный	1,22
		ТСН60		Не гексагональный	1,22



Рис. 23. Цилиндр пластиковый
 Допустимое отклонение: менее 6 мм ± 0.05 мм, выше 6 мм ± 0.1 мм
 Наружная резьба: шаг $= 0.3 \pm 0.05$ мм, высота профиля $= 0.15 \pm 0.05$ мм
 Длина цилиндра $= 12 \pm 0.01$ мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр цилиндра D,	Тип	Масса, г (± 0.05 г)
17.	Цилиндр пластиковый	PCN35	3.6	Гексагональный	0.35
		PCN35		Не гексагональный	0.45
		PCN40	4	Гексагональный	0.55
		PCN40		Не гексагональный	0.65
		PCN45	4.5	Гексагональный	0.76

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм (±1%)	Тип	Масса, г (±0,05 г)
		PCN45	5	Не гексагональный	0,81
		PCN50		Гексагональный	0,93
		PCN50		Не гексагональный	1,31
		PCN55	5,5	Гексагональный	1,40
		PCN55		Не гексагональный	1,41
		PCN60	6	Гексагональный	1,64
		PCN60		Не гексагональный	1,68

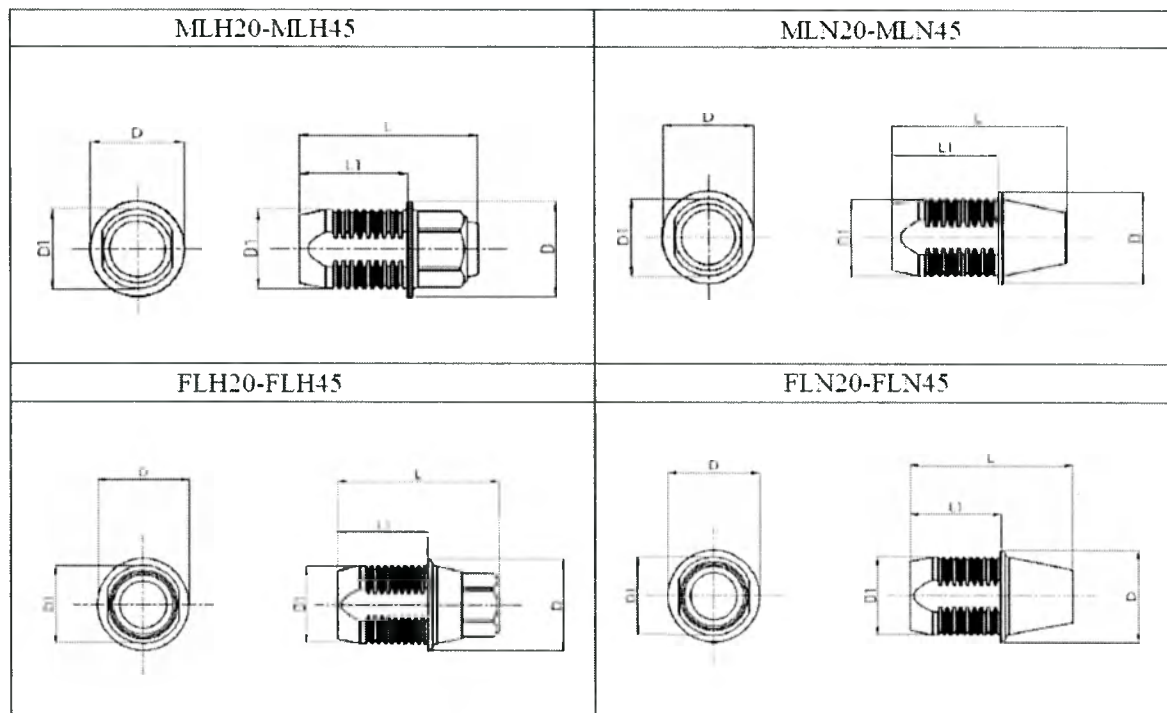


Рис. 24. Цилиндр соединительный

Допустимое отклонение: менее 6 мм $\pm 0,05$ мм, выше 6 мм $\pm 0,1$ мм

Наружная резьба: наружный диаметр $= 2,9 \pm 0,05$ мм, шаг $= 0,3 \pm 0,05$ мм, высота профиля $= 0,15 \pm 0,05$ мм, угол резьбы $= 60^\circ \pm 0,05^\circ$, метрическая

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм (±1%)	Диаметр D1, мм (±1%)	Длина L, мм (±1%)	Длина L1, мм (±1%)	Тип	Масса, г (±0,05 г)
18.	Цилиндр соединительный	MLH20	3,5	2,9	4,6	2	Гексагональный	0,88
		MLH30			5,6	3		0,88
		MLH40			6,6	4		1,02
		MLH25	4,3	3,6	4,6	2		1,02
		MLH35			5,6	3		1,10
		MLH45			6,6	4		1,10
		MLN20	3,5	2,9	4,6	2	Не гексагональный	1,12
		MLN30			5,6	3		1,12
		MLN40			6,6	4		1,20
		MLN25	4,3	3,6	4,6	2		1,20
		MLN35			5,6	3		1,22
		MLN45			6,6	4		1,22
		FLH20	4	3,4	5,15	2	Гексагональный	0,90
		FLH30			6,15	3		0,90
		FLH40			7,15	4		1,30
		FLH25	4,5	3,6	5,15	2		1,30
		FLH35			6,15	3		1,35
		FLH45			7,15	4		1,35
		FLN20	4	3,40	5,15	2	Не гексагональный	0,90
		FLN30			6,15	3		0,90
		FLN40			7,15	4		1,30
		FLN25	4,5	3,6	5,15	2		1,30
		FLN35			6,15	3		1,35
		FLN45			7,15	4		1,35

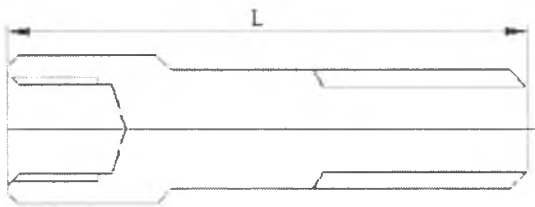
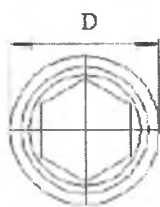


Рис. 25. Винт
Шерховатость поверхности: обточка (0.4-0.8мк)
Допустимое отклонение ± 0.05 мм
Наружная резьба: диаметр $= 1.6 \pm 0.05$ мм, шаг $= 0.35 \pm 0.05$ мм

№	Наименование	Артикул (код заказа)	Диаметр D, мм ($\pm 1\%$)	Длина L, мм ($\pm 1\%$)	Масса, г ($\pm 0,05$ г)
19.	Винт	MPCS	7	2	1,31

Комплект поставки:

- Имплантаты дентальные IBS одного исполнения - 1 упаковка,
- Принадлежности* в индивидуальной упаковке
- Инструкция по применению – 1 шт.

* перечень принадлежностей выбирается врачом в зависимости от клинической ситуации.

Санитарная обработка.

Изделие поставляется стерильным. Метод стерилизации – радиационный, значение поглощенной дозы – 25 кГр.

Изделие предназначено только для однократного применения, повторная стерилизация изделия запрещена.

Условия хранения и транспортировки.

Условия транспортирования и хранения: температура воздуха от $+0^\circ\text{C}$ до $+35^\circ\text{C}$ при относительной влажности от 35% до 65% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

Условия эксплуатации: температура воздуха от $+5^\circ\text{C}$ до $+42^\circ\text{C}$ при относительной влажности от 35% до 65% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа.

Хранить изделие в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, чистом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, при контролируемой температуре. Срок хранения указан на этикетке каждого изделия.

Рекомендации врачу-специалисту.

Имплантаты дентальные предназначены для всех случаев косметической или функциональной реабилитации с использованием внутрикостных зубных имплантатов. Могут использоваться как на нижней, так на верхней дуге у пациентов с частичной или полной адентией. В протезировании могут использоваться одинарные коронки, мосты, частичные или полные зубные протезы, выполняемые при помощи ортопедических конструкций.

Компания-производитель рекомендует оценивать качество костной ткани на этапе планирования, размер используемого имплантата в соответствии с положением в ротовой полости, изначальную стабильность в конце поставки, геометрическую зависимость между имплантатом и протезом во время планирования протезирования и составления программы периодических проверок.

Противопоказания:

Имплантаты дентальные противопоказаны пациентам с плохим общим состоянием здоровья или курящим, а также больным системными патологиями или раком, с серьезными заболеваниями иммунной системы, кардиологическими, неврологическими или эндокринными расстройствами, хроническими или острыми инфекционными заболеваниями, серьезными васкулярными проблемами, хроническим челюстным остеоитом, несоответствующим и/или плохим качеством костной ткани, бруксизмом, плохой гигиеной полости рта, недостаточными умственными способностями, пациентам, употребляющим наркотики и алкоголь, беременным женщинам, пациентам с аллергией на титан или на схожие металлы и часто подвергаемые радиационному

оолучению. Все проблемы пародонтоза должны быть устранены до постановки имплантатов.

Потенциальные осложнения:

После выполнения процедур с дентальными имплантатами пациенты могут испытывать некоторые побочные эффекты, такие как боль, опухоли, гематомы, проблемы с речью и воспаление мягких тканей. Несмотря на высокий процент успешных результатов установки дентальных имплантатов и их стабильности, опасность неудачных операций не может быть полностью устранена. Долгосрочные риски, которые могут быть связаны с постановкой имплантатов, включает в себя резорбцию кости, отторжение, отек, хроническую боль и частичное обнажение. Успех имплантационной терапии тесно связан с правильностью постановки медицинского диагноза, планированием терапии, используемой методики хирургии и протезирования. Компания производитель собирает информацию обо всех случаях возникших осложнений в процессе установки имплантатов и просит незамедлительно сообщать об этом.

Меры предосторожности

1. Использовать изделие только по предусмотренному назначению.
2. К использованию изделия допускаются только лица, которые ознакомились с данной инструкцией, имеют медицинское образование и все необходимые разрешения для работы.
3. Использование изделия в случае нарушения упаковки категорически запрещено, в этом случае, изделие должно быть возвращено производителю.
4. Повторная стерилизация изделия запрещена.
5. Повторное применение изделия запрещено.
6. Допускается применение имплантатов только с ортопедическими компонентами, производства компании Innobiosurg Co., Ltd («Иннобиосердж Ко., Лтд»), Республика Корея.
7. Установка имплантатов и ортопедических компонентов производится только при помощи специальных инструментов, производства компании Innobiosurg Co., Ltd («Иннобиосердж Ко., Лтд»), Республика Корея.
8. Использование инструментов и ортопедических компонентов других фирм категорически запрещено.

Информация о выборе принадлежностей к тому или иному имплантату

Врач специалист принимает решение о выборе принадлежностей на основании следующих факторов:

- На основании выбранного имплантата,
- Состояние соседнего зуба, десен и полости рта пациента,
- Форма зуба, которая будет восстановлена при помощи ортопедических компонентов,
- Поверхности зуба (челюсть закрыта в нормальном состоянии).

Материалы (Информация о применении для медицинского работника)

Изделие и упаковка изделия не содержит латекса и поливинилхлорида (ПВХ). Ограничений по совместимости материалов нет.

Указания по применению

Перед любой операцией имплантации у пациента должен быть собран анамнез, проведено клиническое и рентгенологическое исследования.

Перед операцией врач-стоматолог должен освоить все хирургические навыки и пройти специальное обучение для правильного планирования лечения и успешного выполнения операции. Недостаточные знания и практические навыки могут привести к неудовлетворительному результату лечения. Отсутствие остеоинтеграции и неудовлетворительный результат имплантации могут быть обусловлены нарушением техники операции.

Информация для пациентов.

Пациенты должны быть предупреждены стоматологом обо всех рисках хирургической операции и должны проконсультироваться со своим лечащим врачом перед операцией. Кроме того, пациенты должны быть проинструктированы о необходимых регулярных профилактических осмотрах.

Информация о проведении установки имплантата

Перед хирургическим вмешательством на этапе планирования необходимо убедиться, что для установки выбранного имплантата достаточно пространства, а также есть условия для изготовления соответствующей ортопедической конструкции. Перед подготовкой ложа имплантата необходимо убедиться в надлежащем качестве необходимых инструментов и их стерильности. Должны быть приняты все меры для минимизации хирургической травмы тканей пациента. Необходимо контролировать скорость вращения инструментов в соответствии с характеристиками костной ткани, обязательно постоянное охлаждение стерильным раствором во время формирования ложа имплантата для предупреждения повреждения окружающих тканей и нарушения остеонтеграции имплантата. При использовании фрез необходимо соблюдать их последовательность (от малого диаметра к большому), совмещая небольшое давление на инструмент и движения вверх-вниз каждые 1-2 секунды. Любая ошибка при выборе длины препарирования по данным рентгенологических исследований может привести к повреждению нервов и других анатомических образований у пациента. После подготовки ложа имплантата необходимо проверить вид и размер имплантата по его этикетке, достать ампулу, содержащую имплантат, и ввести имплантат на необходимую глубину, путем вкручивания в кость с помощью соответствующих инструментов для установки имплантатов IBS, при этом максимальное усилие должно составлять 25Нсм, это необходимо для предотвращения повреждения имплантата или инструментов во время установки.

После установки имплантата необходимо оценить его первичную стабильность и качество костной ткани перед изготовлением ортопедической конструкции. Компания производитель не может отследить использование изделий и не несет ответственности за неудовлетворительные результаты лечения, побочные реакции или повреждения, произошедшие по вине пациента или врача-стоматолога на любом этапе лечения, при применении продукции Innobiosurg Co., Ltd («Иннобиосердж Ко., Лтд»), Республика Корея.

Период восстановления после хирургического вмешательства зависит от клинического состояния пациента. Для оценки результата лечения пациент должен пройти клинические и рентгенологические исследования.

Более детальная информация по всем хирургическим манипуляциям представлена на сайте компании-производителя.

Технический ремонт и обслуживание.

Техническому ремонту и гарантийному обслуживанию не подлежит. В случае, если нарушена целостность упаковки изделия, требуется сообщить компании-производителю для замены изделия. Повторная стерилизация запрещена.

Маркировка изделия.

Каждое изделие упаковано в герметичную упаковку из полиэтилена, и далее в картонную коробку (из плотного картона). Упаковка герметична и обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения имплантата.

Изделия и принадлежности поставляются стерильными.

Повторная стерилизация изделия запрещена. Повторное применения изделия запрещено. Маркировка изделия не предусмотрена (поверхность имплантатов и принадлежностей не содержит надписей нанесенных методом лазерной гравировки или ярлыков).

Маркировка упаковки изделия содержит следующую информацию:

- Наименование изделия,
- Артикул (код изделия),
- Номер партии (LOT),
- Основные размеры,
- Информация о производителе (название и адрес),
- Дата изготовления и дата истечения срока годности,
- Маркировка CE (подтверждающая соответствие требованиям Европейской директивы),
- Информация о компании-представителе на территории ЕС,
- Символ «перед применением ознакомьтесь с инструкцией»,
- Символ, запрещающий повторное применение,
- Символ, который обозначает температуру хранения.

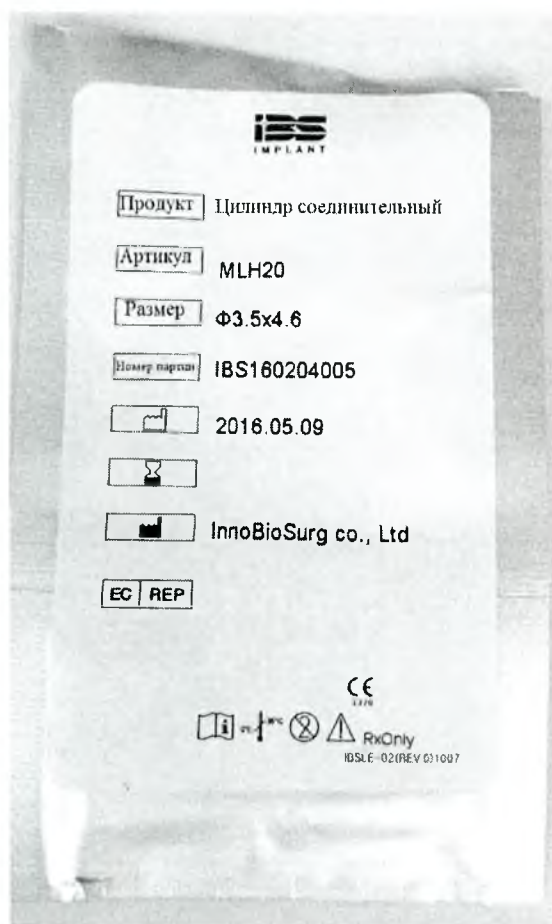


Рис 1. Маркировка изделия.

Сведения об утилизации

Утилизацию изделия проводить в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы). После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

Гарантии

Гарантийный срок хранения – 3 года, срок сохранения стерильности – 3 года.

Адрес для приема рекламаций:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Элмас" (ООО "Элмас")
Юридический адрес: 141190, г. Фрязино, Заводской пр-д д. 4,
Фактический адрес: 107023, г. Москва, ул. Семеновская Б., д. 40, стр. 2а, оф. 103
ИНН 5052001759, КПП 505201001, ОКПО 31848333
Innobiosurg Co., Ltd («Иннобиосердж Ко., Лтд»), Республика Корея.
44-19, Techno 10-ro, Youseong-gu, Daejeon, Republic of Korea.
Тел: +82(042)933-2879, Факс: +82(042)933-2881, email: skpark@ibsimpan.com



위 사실확인서 ----- 에
기재된 주식회사 이노바이오퍼지 대표
이사 왕 제 원 -----

의 대리인 장 진 위 ----- 는
본 공증인의 면전에서 위 본인이 --
기명날인한 것임을 확인하였다.

2016년 07월 13일

이 사무소에서 위 인증한다.



공 증 사무소 **공증인가 법무법인 현대**

소 속 서울중앙지방검찰청

소재지 서울특별시 중구 명동길 65, 8층
표 시 (명동1가, 보림빌딩)

공증인 공증담당변호사
조 창 기

본 사무소는 인가번호 제90호에 의거하여
2015년 02월 07일 법무부 장관으로부터
공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

CHANG CHEN WEI -----

attorney-in-fact of
INNOBIOSURG CO.,LTD. -----
PRESIDENT/ WANG JE WON -----

appeared before me and admitted
said principal`s subscription to
the attached Letter of Confirmation

This is hereby attested on this
13th day of Jul. 2016 at this office.

**HYUNDAI LAW FIRM
& NOTARY OFFICE**

Seoul Central District Prosecutor`s Office
65, Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul

Signature of the Notary Public
JO CHANG KI

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public Since
7, Feb. 2015 Under Law No.90.

서울특별시 중구 명동길 65, 8층
(명동1가, 보림빌딩)



공증인가
법무법인 **현 대**

(전화) 02)775-7085
(팩스) 02)775-7080

65, Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul
TEL: 02)775-7085 FAX: 02)775-7080

서울특별시 중구 명동길 65, 8층
(명동1가, 보림빌딩)



공증인가
법무법인 **현 대**

(전화) 02)775-7085
(팩스) 02)775-7080

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Republic of Korea

This public document

2. has been signed by JO CHANG KI

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of HYUNDAI LAW FIRM AND NOTARY
OFFICE

Certified

5. at Seoul

6. 14/07/2016

7. by The Ministry of Justice

8. No. 16-03-0034796

9. Seal/ stamp

10. Signature

Park Hee Sang



Park Hee Sang

[Large blue ink signature]

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

/Наклейка/

Юридическая фирма и нотариальный офис Хёндэ (Hyundai)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА И НОТАРИАЛЬНЫЙ ОФИС ХЁНДЭ

65, Меонгдонг-гил, Юнг-гу, Сеул

ТЕЛ.: 02)775-7085 ФАКС: 02)775-7080

403

TEL: 02)775-7085 FAX: 02)775-7080

서울특별시 중구 명동길 65, 8층
(명동1가, 보림빌딩)



공증인가
법무법인 현대

(전화) 02)775-7085
(팩스) 02)775-7080

1

ЧАНГ ЧЕН ВЕЙ-----
представитель по доверенности компании
ИННОБИОСЕРДЖ КО., ЛТД. (INNOBIOSURG CO., LTD.)-----

--
ПРЕЗИДЕНТ / ВАНГ Е ВОН-----

предстал передо мной и подтвердил
указанную подпись доверителя к
приложенному Подтверждающему Письму-----

Настоящим подтверждаю
13 июля 2016 года в этом офисе.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА И НОТАРИАЛЬНЫЙ ОФИС ХЁНДЭ
Прокуратура Центрального Района Сеула
65, Меонгдонг-гил, Юнг-гу, Сеул

/Подпись/

Подпись Государственного Нотариуса

ДЖО ЧАНГ КИ

Этот офис был авторизован Министерством Юстиции Республики Корея
для осуществления нотариальных действий с 7 февраля 2015 года
в соответствии с Законом №90.

104

АПОСТИЛЬ

(Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Государство: Республика Корея
Этот государственный документ
2. был подписан ДЖО ЧАНГ КИ
3. который действовал в качестве Государственного Нотариуса
4. имеет печать/штамп ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ И НОТАРИАЛЬНОГО ОФИСА
ХЁНДЭ

Заверено

5. в Сеуле
6. 14/07/2016
7. Министерством Юстиции
8. № 16-03-0034796
9. Печать/штамп
10. Подпись
/Подпись/
Парк Хи Санг

/Печать/

Министерство Юстиции Республика Корея

105

Переводчик

 Фролова Марина Михайловна

Город Москва.

Двадцать пятого июля две тысячи шестнадцатого года.

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Фроловой Мариной Михайловной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 41-22346

Взыскано по тарифу: 300 руб., в том числе п. т. р 200 руб.

Нотариус



Протинуровано, пронумеровано и скреплено печатью 105 лист(-а.-ов).

Нотариус


1. Шек

be
Город Москва

Шестое сентября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Климова Анна Сергеевна,

временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Ростовая Елена Николаевна, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных искажений или каких-либо особенностей нет.

Налицо, лично, обратившись к совершению нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность создания документа и соответствие изложенной в нем фактов действительности.

Затем удостоверено в реестре № 16-1425
123600



Всего прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
л. 16/16 стр. 16/16
ВРИО нотариуса



Registered No. 2015 - 15927

NOTARIAL CERTIFICATE

NEIGHBORS

LAW FIRM AND NOTARY OFFICES

702,Samsong Bldg.,34,Jong-ro 3 gil,
Jongno-gu, Seoul, Korea



APPROVED BY

Manager

Innobiosurg Co., Ltd

 Yoo Bo Reum

INNOSURG CO., LTD.

PRESIDENT YOO BO REUM

ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Имплантаты дентальные IBS с принадлежностями (Innobiosurg Co., Ltd («Иннобиосердж Ко., Лтд»), Республика Корея.)



1

2

3



Просим Вас дополнить инструкцию по применению на медицинское изделие: «Имплантаты дентальные IBS с принадлежностями» следующей информацией и считать ее приоритетной:

Маркировка изделия.

Каждое изделие упаковано в герметичную упаковку из полиэтилена, и далее в картонную коробку (из плотного картона). Упаковка герметична и обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения имплантата.


Изделия и принадлежности поставляются стерильными.

Повторная стерилизация изделия запрещена. Повторное применение изделия запрещено. Маркировка изделия не предусмотрена (поверхность имплантатов и принадлежностей не содержит надписей нанесенных методом лазерной гравировки или ярлыков).

Маркировка упаковки изделия содержит следующую информацию:

- Наименование изделия,
- Артикул (код изделия),
- Номер партии (LOT),
- Основные размеры,
- Информация о производителе (название и адрес),
- Дата изготовления и дата истечения срока годности,
- Маркировка CE (подтверждающая соответствие требованиям Европейской директивы),
- Информация о компании-представителе на территории ЕС,
- Символ «перед применением ознакомьтесь с инструкцией»,
- Символ, запрещающий повторное применение,
- Символ, который обозначает температуру хранения,
- Символ, который обозначает, что изделие стерильно,
- Символ, который обозначает метод стерилизации,

2

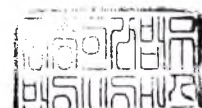

- Символ, запрещающий повторную стерилизацию.


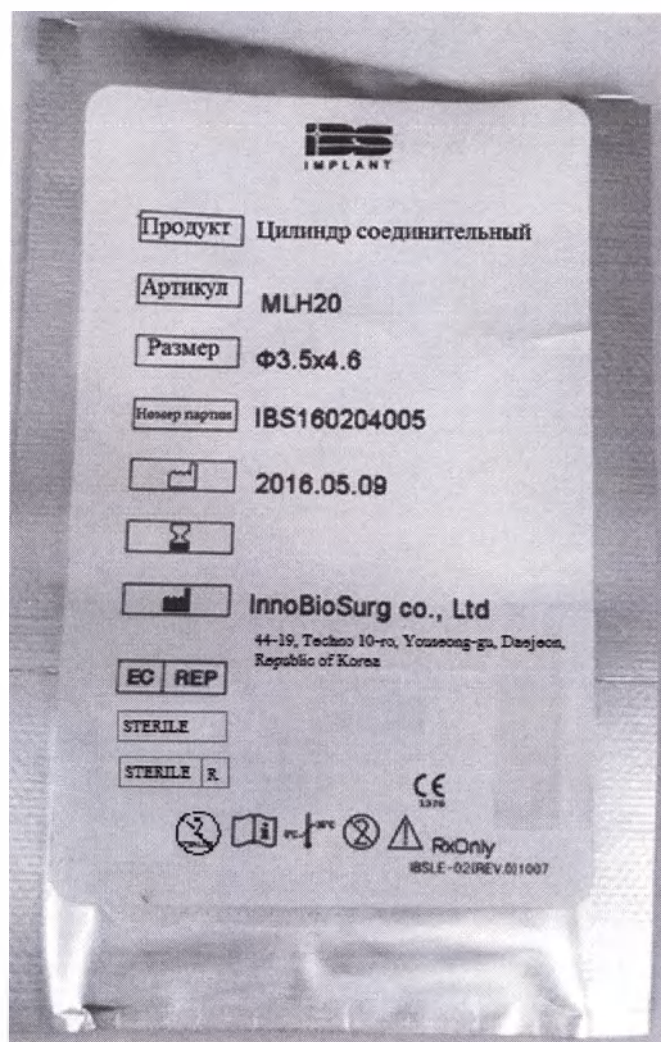


Рис 1. Маркировка изделия.



З

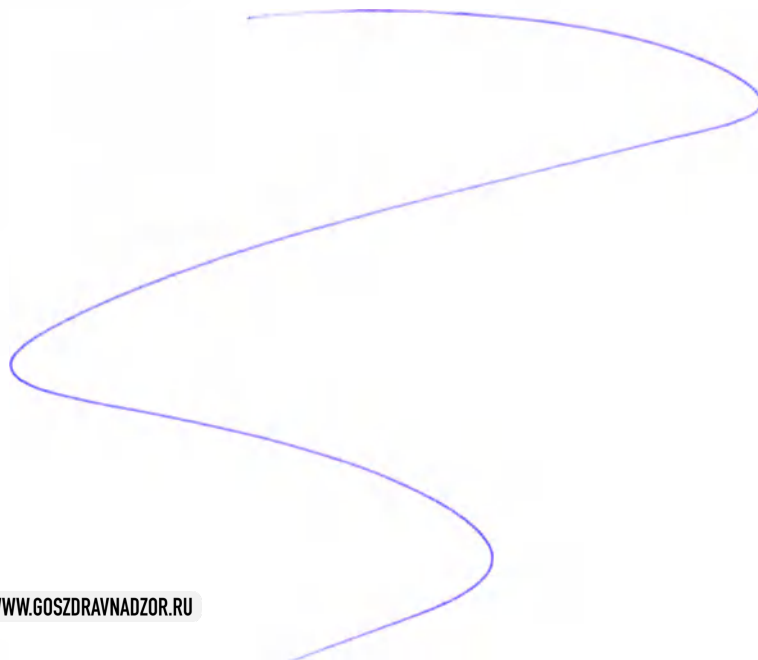

등부 2015년 제 15927호

Registered No. 2015-15927

인 증

NOTARIAL CERTIFICATE

위 위 임 장 (영문) -----

As a result of checking at my office, I
have found that the attached
Addition of user manual -----

사본은 원본과 대조하여 그와 부합함을
인정한다.

----- copy
exactly corresponds with the original

2015년 09월 01일

이 사무소에서 위 인증한다.

This is hereby attested on this
1st day of Sep. 2015 at this office.

공증
인가 법무법인 네이버스

NEIGHBORS
LAW FIRM AND NOTARY OFFICES

소 속 서울중앙지방검찰청

Belong to Seoul Central
District Prosecutor's Office

서울특별시 종로구 종로3길 34,
702호(삼송빌딩)

702,Samsong Bldg.,34,Jong-ro 3 gil,
Jongno-gu, Seoul, Korea

심 훈 종
공증인 공증담당변호사

심 훈 종

Signature of the Notary Public

SHIM HOON JONG

본 사무소는 인가번호 제7호에 의거하여
1984년 11월 10일 법무부 장관으로부터
공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public Since
10, Nov. 1984 Under Law No.7.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country : Republic of Korea

This public document

2. has been signed by SHIM HOON JONG

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of NEIGHBORS LAW FIRM AND NOTARY
OFFICES

Certified

5. at Seoul

6. 02/09/2015

7. by The Ministry of Justice

8. No. 15-03-0043297



10. Signature

Park Hee Sang

Park Hee Sang

[Large handwritten signature in blue ink]

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА И НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
«НЕЙБОРС»

702, зд. Самсунг, 34, Йонг-ро 3 гил,
Йонгно-гу, Сеул, Корея

Печать: ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «НЕЙБОРС»

Регистрационный номер: 2015-15927

Нотариальное свидетельство

Настоящим удостоверяю, что приложенная копия Дополнения к инструкции по применению является верной и соответствует оригиналу.

Заверено в моем офисе 01 сентября 2015 г.

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА И НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА
«НЕЙБОРС»**

Офис прокурора центрального района г. Сеул

702, зд. Самсунг, 34, Йонг-ро 3 гил,

Йонгно-гу, Сеул, Корея

/подпись/

Подпись нотариуса ШИМ ХУН ЙОНГ

Личный штамп: ШИМ ХУН ЙОНГ

Указанная контора уполномочена министром юстиции Республики Корея оказывать услуги нотариальной конторы с 10 ноября 1984 г. в соответствии с постановлением законом № 7.

АПОСТИЛЬ

(Гагская Конвенция от 5 октября 1961 г.)

1. Страна: Республика Корея

Настоящий публично-правовой документ

2. подписан:

ШИМ ХУН ЙОНГ

3. действующим в должности

НОТАРИУСА

4. скреплен печатью/штампом

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА И НОТАРИАЛЬНАЯ
КОНТОРА «НЕЙБОРС»**

и заверен

5. в г. Сеул

6. 02 сентября 2015 г.

7. Министерством юстиции

8. за № **15-03-0043297**

9. Место печати/штампа

10. Подпись: Парк Хи Санг

Печать: МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Перевод с английского и корейского языков на русский язык выполнил переводчик
Алфёров Арсений Дмитриевич. Достоверность перевода подтверждаю.
Город Москва, пятнадцатого сентября две тысячи пятнадцатого года.

Алфёров Арсений Дмитриевич

Город Москва, пятнадцатого сентября две тысячи пятнадцатого года.

Я, Дормидонтова Любовь Юрьевна, нотариус города Москвы, свидетельствую
подлинность подписи, сделанной переводчиком Алфёровым Арсением Дмитриевичем в
моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 14-2762

Взыскано по тарифу: 100руб.

Нотариус г.Москвы



[Signature]

Л.Ю.Дормидонтова

Всего прошнуровано
пронумеровано и приложено
печатью _____ листов
Нотариус *[Signature]*



[Handwritten signature]

[Large handwritten flourish]

Город Москва

Двадцать шестое
декабря две тысячи шестнадцатого года.

Я, Ростова Елена Николаевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет. Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие изложенных в нем фактов действительности.

Зарегистрировано в реестре за №

00000000000000000000

Нотариус



Всего прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
п.п. *Ростова Е.Н.*
Нотариус

