


Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения
алкоголя в моче - "Алкосенсор-М" (комплектация А)



Директор ООО «Биосенсор АН»

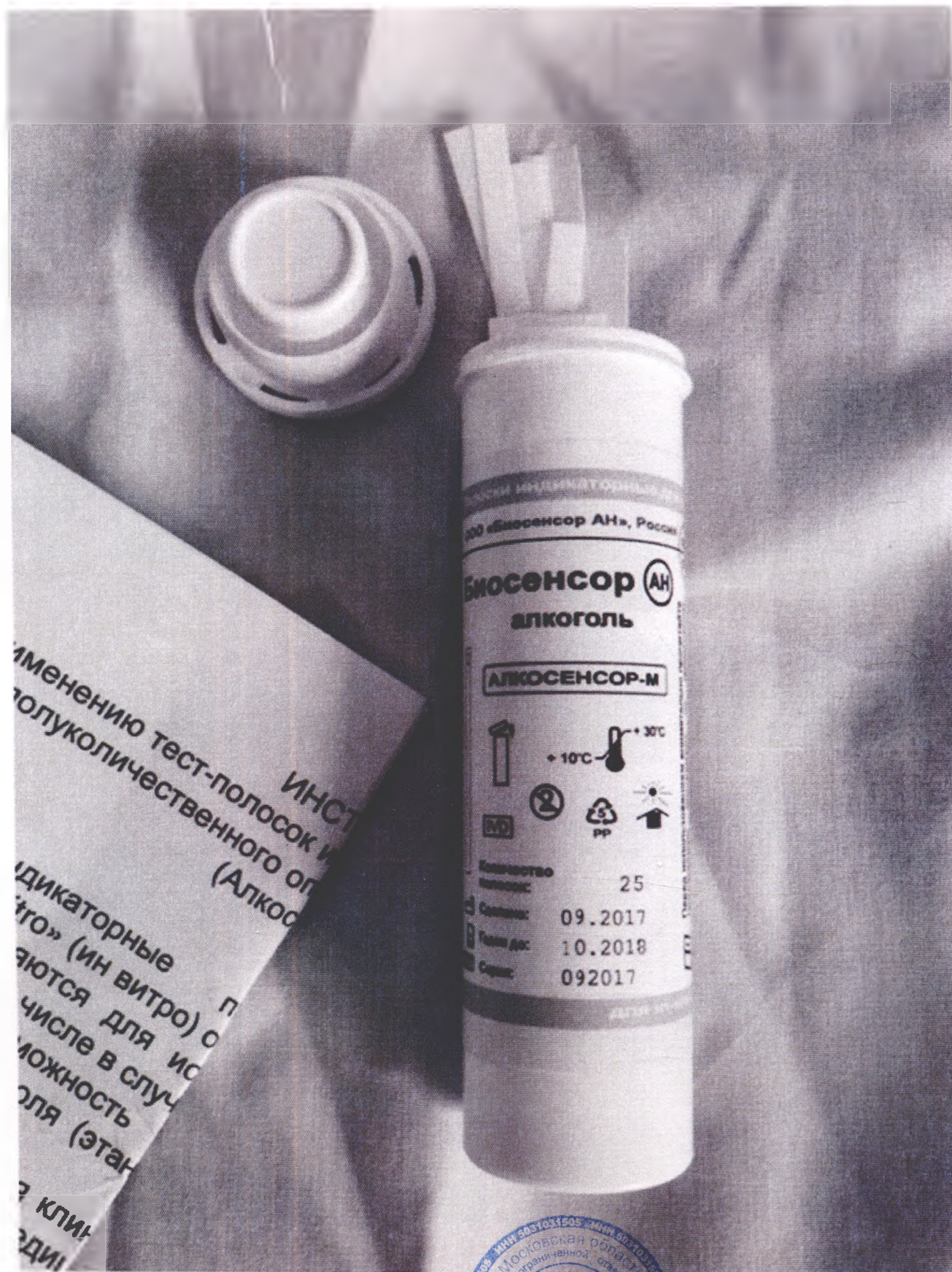

А.Р. Гвоздев

Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения

алкоголя в моче - "Алкосенсор-М" (комплектация В)

"Алкосенсор-М" №1
Годен до: 10.2018г. Серия: 0920171


АЛКОСЕНСОР-М

тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения алкоголя в моче

1. Вскрыть пакет, извлечь тест-полоску.
2. Полностью погрузить сенсорный элемент полоски полностью в мочу.
3. Через 1 минуту извлечь полоску и избыток мочи на сенсорном элементе удалить, промокнув ватным тампоном, ребром полоски к чистой фильтровальной бумаге (салфетка, туалетной бумаге) на 2-3 секунды.
4. Через 2 минуты (но не более, чем через 5 минут) с момента погружения сенсорного элемента в мочу сравнить его окраску с цветовой шкалой на этикетке упаковки.

Концентрация алкоголя

проценты	0.0	0.01	0.03	0.1
промилле	0.0	0.1	0.3	≥ 1.0

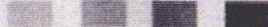

Хранить в сухом месте

от +10 до +30°C

Тул-99-042-49877/09-2016

РУ №

количество

полосок:

1 шт.

Производитель ООО «Биосенсор АН»
МО г. Черноголовка, 1-й пр-д, д. 4
тел. 8(495) 505-0000
e-mail: biosensor@yandex.ru
www.biosensor.ru



Директор ООО «Биосенсор АН»



А.Р. Гвоздев

Судебно-медицинское
экспертное учреждение
г. Москва

