Устройство весов

Внешний общий вид весов и блока дисплея показан на рис.1.

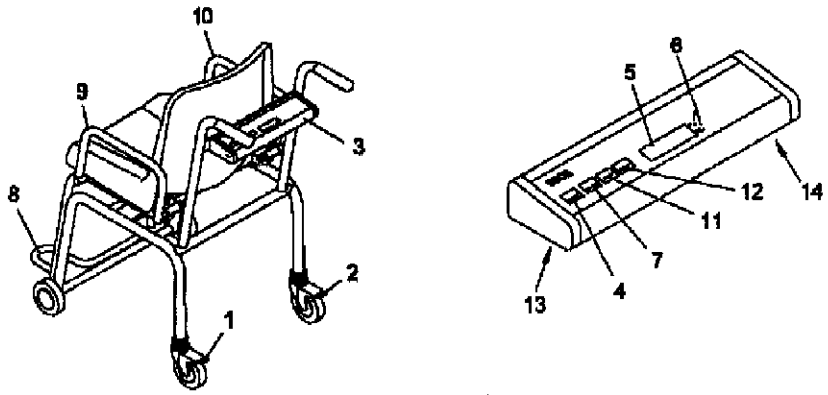


Рис.1

1,2 – Стопоры колес
3 – Блок дисплея
8 – Подставка для ног
9,10 – Откидывающиеся подлокотники
5 – Дисплей
6 – Индикатор единиц измерения
4 – Кнопка вкл/выкл. START
7 – Кнопка переключения единиц измерения kg/lbs
11 – Кнопка тарирования TARE
12 – Кнопка удержания показаний на дисплее HOLD

Подготовка к работе

Распаковка и сборка

Удалите транспортную упаковку и соберите весы в порядке, показанном на рис.2 – рис.7.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Установите ручки кресла.

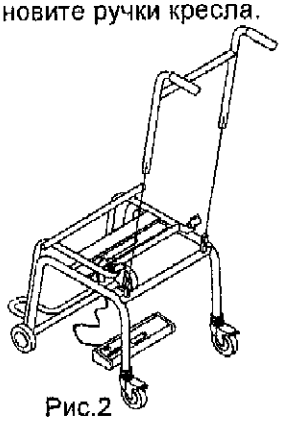


Рис.2

Зафиксируйте ручки винтами.

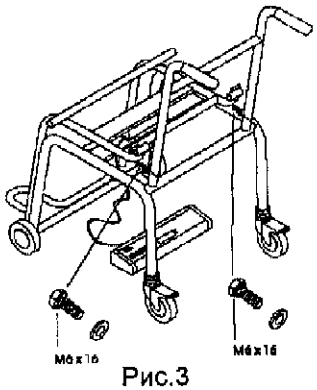


Рис.3

Закрепите блок дисплея.

Проведите провод вдоль стойки и закрепите его клипсами.

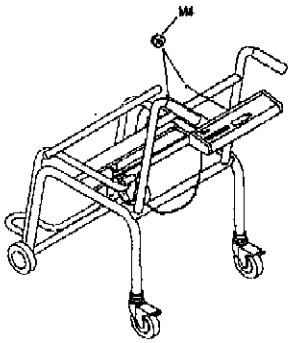


Рис.4

Установите на раму пластиковое сиденье.

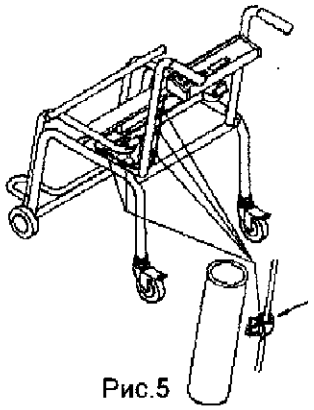


Рис.5

Установите откидывающиеся подлокотники

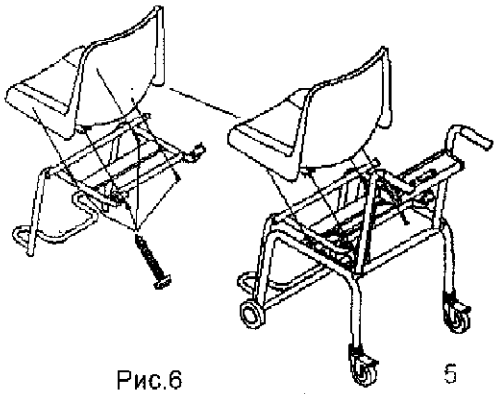


Рис.6


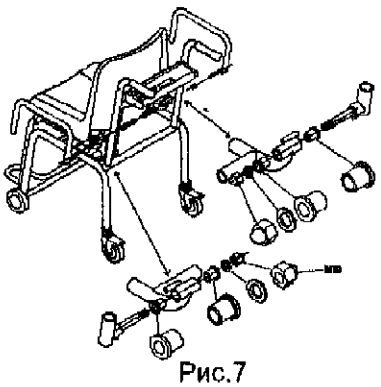


Рис.7

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Приложение 1

Весы-кресло медицинское электронное seca 952

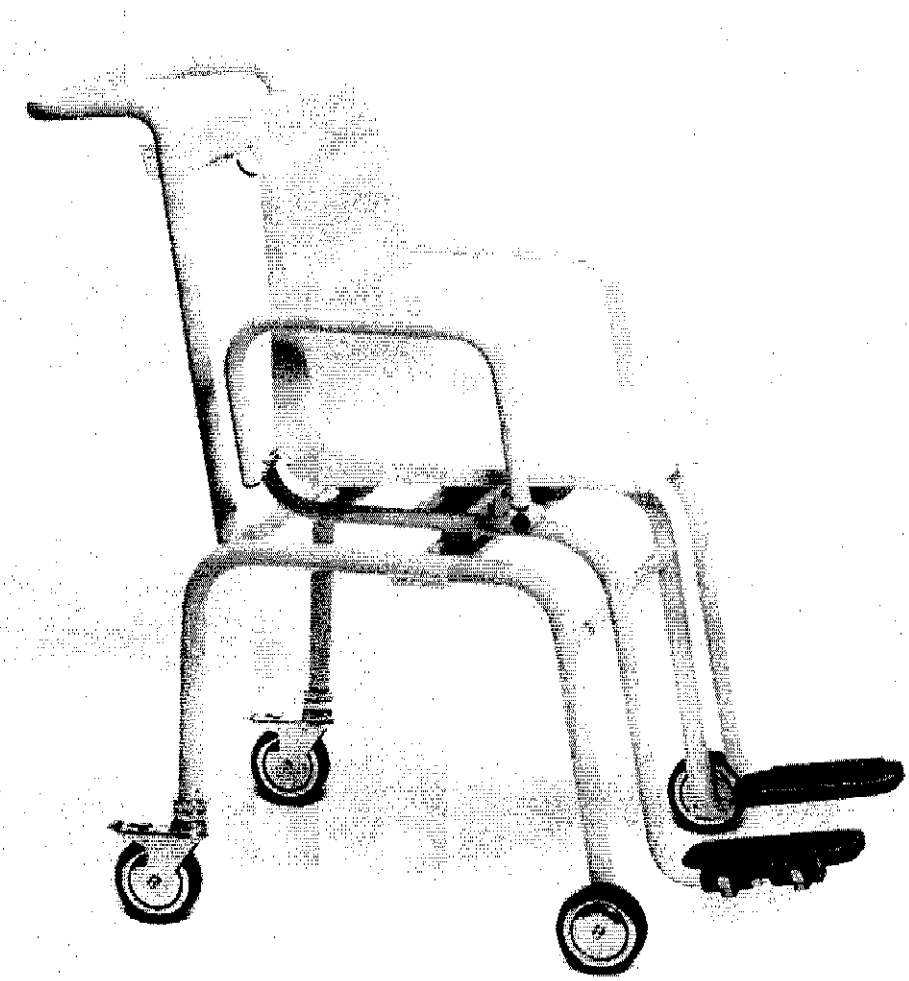

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU