«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Медтехника»



С.С. Хорушко

Инструкция пользователя
изделия медицинского назначения

«Зубы искусственные акриловые HICO»
производства компании Anyang Dimei Dental Material Company, КНР

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Зубы искусственные акриловые HICO предназначены для использования в ортопедической стоматологии при изготовлении съемных конструкций зубных протезов.
Зубы изготовлены из акрилового полимера, обладают полной анатомической формой с небной стороны. Зубы имеют трехслойную конструкцию, выпускаются наборами (гарнитурами). Цвета – по шкале VITA.
Зубы соединяются с полимерным базовым материалом горячего отверждения.
Зубы сохраняют способность к повторной полировке до восстановления первоначального блеска.

Зубы искусственные акриловые HICO

Зубы искусственные акриловые Hico предназначены для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съемных конструкций зубных протезов.

Зубы Hico изготовлены на основе сшитых акриловых полимеров. Они обладают флуоресцирующим эффектом (в УФ свете искусственные зубы, вставленные в частичный протез, выглядят гармонично рядом с естественными зубами).

Зубы Hico обладают хорошим химическим соединением с базисом протеза. Как и их естественный прототип, зубы Hico отличаются оптимальной функциональностью и косметичностью.

Подбор цвета производится при естественном освещении, с учетом формы, размера и цвета естественных зубов.

Зубы Hico выпускаются по 16 цветовым оттенкам шкалы VITA: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, 33, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4.

Зубы Hico имеют 4 фасона передних верхних зубов, 4 фасона передних нижних зубов, 4 фасона жевательных зубов.

Зубы Hico выпускаются в картонных коробках и секционных контейнерах.


Комплектность в картонных коробках (гарнитуры на восковых планках):

1 полный гарнитур зубов:


- 1х6 передних верхних зубов,
- 1х6 передних нижних зубов,
- 1х8 жевательных верхних зубов,
- 1х8 жевательных нижних зубов;

Комплектность в секционных контейнерах:


- 4 контейнера полных гарнитуров на 28 зубов- 20 гарнитуров;
- 1 контейнер передних верхних гарнитуров на 6 зубов - 20 гранитуров;
- 1 контейнер передних нижних гарнитуров на 6 зубов - 20 гарнитуров;
- 4 контейнера жевательных (боковых) гарнитуров на 16 зубов - 40 гарнитуров.

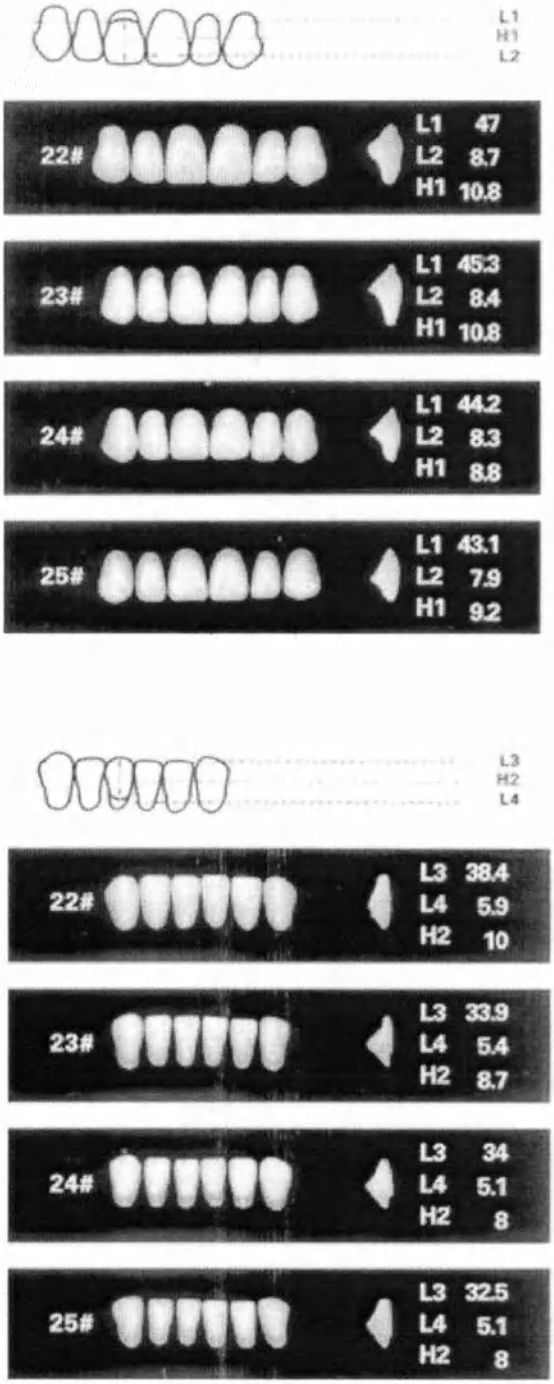

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

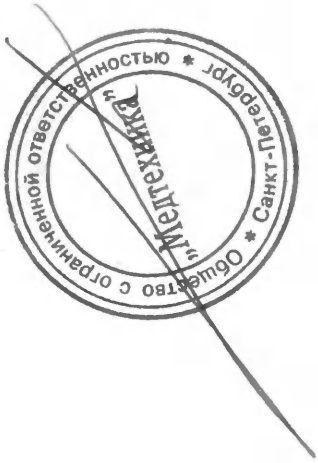

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

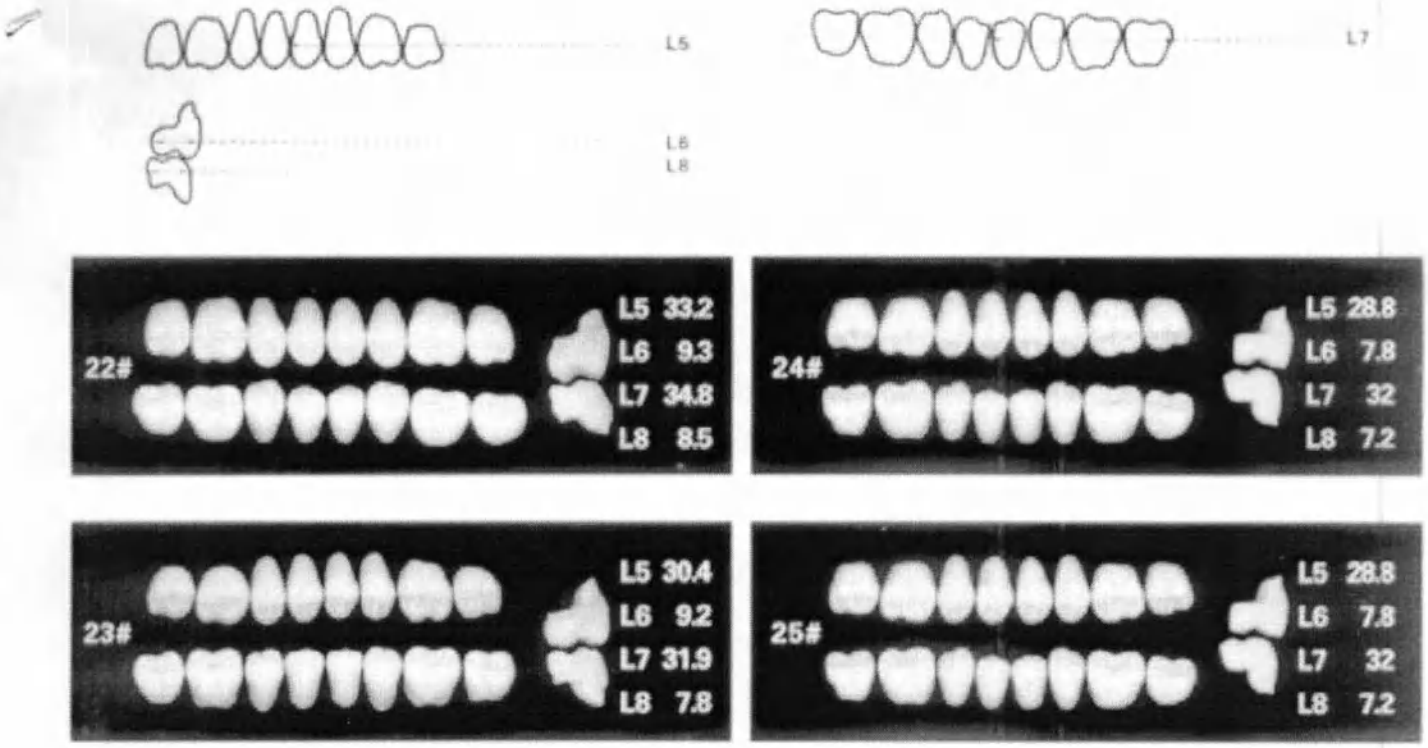


Размеры зубов отличаются не более чем на 5% от заявляемых.
Комплекты передних и боковых зубов не имеют заметного отличия в цвете по сравнению с универсальной шкалой расцветок.
Линия раздела между режущей и пришеечной областями не лицевой поверхности зуба не заметна.
При визуальном осмотре зубы имеют гладкую, блестящую, непористую поверхность.
Зубы не имеют пор, и дефектов поверхности и полировки, а также видимых посторонних включений на коронковой части зуба.
Отсутствуют заметные изменения в цвете между облученной и необлученной половинками зуба.

СТАНДАРТНАЯ КАРТА фасонов и форм зубов HICO с учетом их сочетаний

Передние верхние зубы				Передние нижние зубы				Жевательные зубы				
Фасон	L1,мм	L2,мм	H1,мм	Фасон	L3,мм	L4,мм	H2,мм	Фасон	L5,мм	L6,мм	L7,мм	L8, мм
22#	47	8.7	10.8	**22#**	38.4	5.9	10	**22#**	33.2	9.3	34.8	8.5
23#	45.3	8.4	10.8	**23#**	33.9	5.4	8.7	**23#**	30.4	9.2	31.9	7.8
24#	44.2	8.3	8.8	**24#**	34	5.1	8	**24#**	28.8	7.8	32	7.2
25#	43.1	7.9	9.2	**25#**	32.5	5.1	8	**25#**	28.8	7.8	32	7.2

Зубы укреплены на монтировочных планках и упакованы в контейнеры, которые защищают содержимое от повреждения при транспортировании, хранении и использовании. Контейнеры размещаются в картонной коробке.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

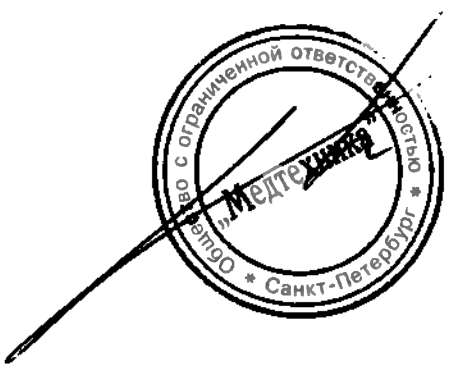

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU