

Генеральный директор



ООО «Универсалмедсервис»

Е.Н. Котельникова

декабрь 2017 г.

Инструкция по применению

ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ ПО ТУ 2514-001-44291926-2016

производства ООО «Универсалмедсервис»

2017 г.

Содержание:

1. Назначение	3
2. Область применения	3
3. Показания для применения	3
4. Противопоказания для применения и возможные побочные действия	3
5. Применение перчаток и меры предосторожности	3
6. Технические характеристики	4
7. Комплектность	33
8. Сведения об эксплуатации	33
9. Условия эксплуатации	34
10. Маркировка	34
11. Упаковка	34
12. Транспортирование и хранение	35
13. Требования охраны окружающей среды	35
14. Гарантии изготовителя	36
15. Сведения об утилизации	36
16. Гарантийный талон	37

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Перчатки латексные медицинские диагностические нестерильные одноразовые **неопудренные**, предназначенные для защиты медицинского персонала от воздействия вредных факторов внешней производственной среды, для снижения риска контаминации рук персонала транзиторными возбудителями и последующей их передачи пациентам, для снижения риска заражения пациентов микробами, являющимися частью резидентной флоры рук медицинских работников.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Перчатки латексные медицинские диагностические нестерильные одноразовые **неопудренные** применяются в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Перчатки латексные медицинские диагностические нестерильные одноразовые **неопудренные** необходимо применять для снижения риска контаминации объектов внешней среды потенциально патогенными микроорганизмами и передачу их от медицинского персонала к пациенту и обратно, а также от одного пациента к другому.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- Перчатки могут вызвать аллергическую реакцию.

5. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЧАТОК И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением перчаток необходимо вскрыть упаковку. Для того чтобы достать перчатки и использовать их по назначению, необходимо обработать руки.

Необходимо провести гигиеническую антисептическую обработку рук в зависимости от предполагаемых манипуляций или процедур.

Одеть перчатки, не засоряя внешнюю поверхность.

Необходимо менять перчатки при:

- переходе от одного пациента к другому.
- после обнаружения видимого дефекта;
- после возможного или действительно имевшего место прокола;
- если перчатка начинает вздуваться, растягиваться, липнуть или неплотно сидит на руке в результате впитывания материалом жидкостей или смазок;
- в соответствии с правилами, принятыми в ЛПУ.

Обработку перчаток в ходе проведения манипуляций не проводят. При необходимости их следует заменить.


Снятие перчаток Снятие перчаток рекомендуется выполнять согласно следующему алгоритму: • Возьмитесь за перчатку в области основания ладони пальцами другой руки. • Стяните перчатку и удерживайте ее другой рукой. • Затем поместите пальцы свободной руки в манжету перчатки на другой руке и стяните ее аналогично первой. • Вывернув перчатку наизнанку, используйте ее в качестве мешка для другой перчатки. • Поместите

перчатки в предназначенную для них емкость. Затем проведите гигиеническую обработку рук.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перчатки выпускаются неокрашенными (естественного цвета применяемого ла-текса), а также следующих цветов: белый, жёлтый, слоновая кость, синий, зеленый, голубой, черный и коричневый согласно образцам-эталонам или утверждённому каталогу цветности.

Размеры перчаток и их допустимые отклонения должны соответствовать Таблицам 1,2:

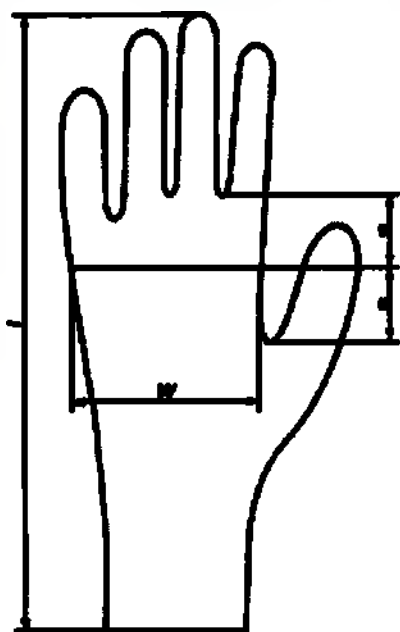

Р и с у н о к 1 - Точки для измерения ширины и длины перчатки

Таблица 1.

Наглядный размер	Ширина по наглядному размеру, мм	Размер	Ширина, мм
Супер-малые (XXS)	≤80	4.0, 4.5	≤82
Сверхмалые (XS)	80±10	5.0, 5.5	83±5
Маленькие (S)	95±10	6.0, 6.5	89±5
Средние (M)		7.0, 7.5	95±5
Большие (L)	110±10	8.0, 8.5	102±6
Сверхбольшие (XL)		9.0, 9.5	109±6
Супер-большие (XXL)	≥110	10,0	≥110

Таблица 2.

Размер	Цвет	Ман жета	Длина, мм	Расстояние до точек измерения толщины, мм (рисунок 2)	Толщина, мм	
					текстури- рованная поверхно сть	Гладкая поверхно сть
Супер- малые (XXS)	Естеств енный вет, белый, жёлтый , слонова я кость, синий, зелёный , голубой , черный,	Обре зана	217, 227, 237, 247,	A=11±1 B=30±2 B=42±3	0,11±0,02	0,08±0,02
			257, 267, 277, 287,		0,12±0,02	0,09±0,02
			297, 307, 317, 327,		0,13±0,02	0,10±0,02
			337, 347, 357, 367,		0,14±0,02	0,11±0,02
			377, 387, 397, 407,		0,15±0,02	0,12±0,02
			417, 427, 437, 447,		0,16±0,02	0,13±0,02
			457, 467, 477, 487,		0,17±0,02	0,14±0,02
			497, 507, 517, 527,		0,18±0,02	0,15±0,02
			537, 547, 557, 567,		0,19±0,02	0,16±0,02
			577, 587, 597±10		0,20±0,02	0,17±0,02
		Закат ана в венч ик	220, 230, 240, 250,		0,21±0,02	0,18±0,02
			260, 270, 280, 290,		0,22±0,02	0,19±0,02
			300, 310, 320, 330,		0,23±0,02	0,20±0,02
			340, 350, 360, 370,		0,24±0,02	0,21±0,02
					0,25±0,02	0,22±0,02
					0,26±0,02	0,23±0,02
					0,27±0,02	0,24±0,02

	коричневый		380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600±10		0,28±0,02 0,29±0,02 0,30±0,02 0,31±0,02 0,32±0,02 0,33±0,02 0,34±0,02 0,35±0,02 0,36±0,02 0,37±0,02 0,38±0,02 0,39±0,02 0,40±0,02	0,25±0,02 0,26±0,02 0,27±0,02 0,28±0,02 0,29±0,02 0,30±0,02 0,31±0,02 0,32±0,02 0,33±0,02 0,34±0,02 0,35±0,02 0,36±0,02 0,37±0,02 0,38±0,02 0,39±0,02 0,40±0,02
Сверхмалые (XS)	Естественный вет, белый, жёлтый , слоновая кость, синий, зелёный ,	Обрезана	217, 227, 237, 247, 257, 267, 277, 287, 297, 307, 317, 327, 337, 347, 357, 367, 377, 387, 397, 407, 417, 427, 437, 447, 457, 467, 477, 487, 497, 507, 517, 527, 537, 547, 557, 567, 577, 587, 597±10	A=11±1 B=31±2 C=44±3	0,11±0,02 0,12±0,02 0,13±0,02 0,14±0,02 0,15±0,02 0,16±0,02 0,17±0,02 0,18±0,02 0,19±0,02 0,20±0,02 0,21±0,02 0,22±0,02 0,23±0,02 0,24±0,02 0,25±0,02 0,26±0,02 0,27±0,02 0,28±0,02 0,29±0,02 0,30±0,02 0,31±0,02 0,32±0,02 0,33±0,02 0,34±0,02 0,35±0,02 0,36±0,02 0,37±0,02 0,38±0,02	0,08±0,02 0,09±0,02 0,10±0,02 0,11±0,02 0,12±0,02 0,13±0,02 0,14±0,02 0,15±0,02 0,16±0,02 0,17±0,02 0,18±0,02 0,19±0,02 0,20±0,02 0,21±0,02 0,22±0,02 0,23±0,02 0,24±0,02 0,25±0,02 0,26±0,02 0,27±0,02 0,28±0,02 0,29±0,02 0,30±0,02 0,31±0,02 0,32±0,02 0,33±0,02 0,34±0,02 0,35±0,02
	голубой , чёрный, коричневый	Закатана в венчик	220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600±10			

					0,39±0,02 0,40±0,02	0,36±0,02 0,37±0,02 0,38±0,02 0,39±0,02 0,40±0,02
Маленькие (S)	Естественный вет, белый, жёлтый , слоновая кость, синий, зелёный • голубой • чёрный, коричневый	Обреза	217, 227, 237, 247, 257, 267, 277, 287, 297, 307, 317, 327, 337, 347, 357, 367, 377, 387, 397, 407, 417, 427, 437, 447, 457, 467, 477, 487, 497, 507, 517, 527, 537, 547, 557, 567, 577, 587, 597±10	A=12±1 B=33±2 C=46±3	0,11±0,02 0,12±0,02 0,13±0,02 0,14±0,02 0,15±0,02 0,16±0,02 0,17±0,02 0,18±0,02 0,19±0,02 0,20±0,02 0,21±0,02 0,22±0,02 0,23±0,02 0,24±0,02 0,25±0,02 0,26±0,02 0,27±0,02 0,28±0,02 0,29±0,02 0,30±0,02 0,31±0,02 0,32±0,02 0,33±0,02 0,34±0,02 0,35±0,02 0,36±0,02 0,37±0,02 0,38±0,02 0,39±0,02 0,40±0,02	0,08±0,02 0,09±0,02 0,10±0,02 0,11±0,02 0,12±0,02 0,13±0,02 0,14±0,02 0,15±0,02 0,16±0,02 0,17±0,02 0,18±0,02 0,19±0,02 0,20±0,02 0,21±0,02 0,22±0,02 0,23±0,02 0,24±0,02 0,25±0,02 0,26±0,02 0,27±0,02 0,28±0,02 0,29±0,02 0,30±0,02 0,31±0,02 0,32±0,02 0,33±0,02 0,34±0,02 0,35±0,02 0,36±0,02 0,37±0,02 0,38±0,02 0,39±0,02 0,40±0,02
		Закатана в венчик	220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600±10			

Средние (М)	Естественный вет, белый, жёлтый , слоновая кость, синий, зелёный	Обреза	217, 227, 237, 247, 257, 267, 277, 287, 297, 307, 317, 327, 337, 347, 357, 367, 377, 387, 397, 407, 417, 427, 437, 447, 457, 467, 477, 487, 497, 507, 517, 527, 537, 547, 557, 567, 577, 587, 597±10	A=13±1 B=33±2 C=48±3	0,11±0,02 0,12±0,02 0,13±0,02 0,14±0,02 0,15±0,02 0,16±0,02 0,17±0,02 0,18±0,02 0,19±0,02 0,20±0,02 0,21±0,02 0,22±0,02 0,23±0,02 0,24±0,02 0,25±0,02 0,26±0,02 0,27±0,02 0,28±0,02 0,29±0,02 0,30±0,02 0,31±0,02 0,32±0,02 0,33±0,02 0,34±0,02 0,35±0,02 0,36±0,02 0,37±0,02 0,38±0,02 0,39±0,02 0,40±0,02	0,08±0,02 0,09±0,02 0,10±0,02 0,11±0,02 0,12±0,02 0,13±0,02 0,14±0,02 0,15±0,02 0,16±0,02 0,17±0,02 0,18±0,02 0,19±0,02 0,20±0,02 0,21±0,02 0,22±0,02 0,23±0,02 0,24±0,02 0,25±0,02 0,26±0,02 0,27±0,02 0,28±0,02 0,29±0,02 0,30±0,02 0,31±0,02 0,32±0,02 0,33±0,02 0,34±0,02 0,35±0,02 0,36±0,02 0,37±0,02 0,38±0,02 0,39±0,02 0,40±0,02
	, голубой , чёрный, коричневый	Закатана в венчик	220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600±10			
Большие (L)	Естественный вет, белый, жёлтый , слоновая кость,	Обреза	217, 227, 237, 247, 257, 267, 277, 287, 297, 307, 317, 327, 337, 347, 357, 367, 377, 387, 397, 407, 417, 427, 437, 447, 457, 467, 477, 487, 497, 507, 517, 527,	A=14±1 B=34±2 C=50±3	0,11±0,02 0,12±0,02 0,13±0,02 0,14±0,02 0,15±0,02 0,16±0,02 0,17±0,02 0,18±0,02 0,19±0,02 0,20±0,02	0,08±0,02 0,09±0,02 0,10±0,02 0,11±0,02 0,12±0,02 0,13±0,02 0,14±0,02 0,15±0,02 0,16±0,02 0,17±0,02

	синий, зелёный , голубой , черный, коричне вый		537, 547, 557, 567, 577, 587, 597±10		0,21±0,02 0,22±0,02 0,23±0,02 0,24±0,02 0,25±0,02 0,26±0,02 0,27±0,02 0,28±0,02 0,29±0,02 0,30±0,02 0,31±0,02 0,32±0,02 0,33±0,02 0,34±0,02 0,35±0,02 0,36±0,02 0,37±0,02 0,38±0,02 0,39±0,02 0,40±0,02	0,18±0,02 0,19±0,02 0,20±0,02 0,21±0,02 0,22±0,02 0,23±0,02 0,24±0,02 0,25±0,02 0,26±0,02 0,27±0,02 0,28±0,02 0,29±0,02 0,30±0,02 0,31±0,02 0,32±0,02 0,33±0,02 0,34±0,02 0,35±0,02 0,36±0,02 0,37±0,02 0,38±0,02 0,39±0,02 0,40±0,02
		Закат ана в венч ик	220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600±10			
Сверхб ольшие (XL)	Естеств енный вет, белый, жёлтый , слонова я кость, синий, зелёный	Обре зана	217, 227, 237, 247, 257, 267, 277, 287, 297, 307, 317, 327, 337, 347, 357, 367, 377, 387, 397, 407, 417, 427, 437, 447, 457, 467, 477, 487, 497, 507, 517, 527, 537, 547, 557, 567, 577, 587, 597±10	A=15±1 B=35±2 C=52±3	0,11±0,02 0,12±0,02 0,13±0,02 0,14±0,02 0,15±0,02 0,16±0,02 0,17±0,02 0,18±0,02 0,19±0,02 0,20±0,02 0,21±0,02 0,22±0,02	0,08±0,02 0,09±0,02 0,10±0,02 0,11±0,02 0,12±0,02 0,13±0,02 0,14±0,02 0,15±0,02 0,16±0,02 0,17±0,02 0,18±0,02 0,19±0,02


	, голубой, черный, коричневый	Закатана в венчик	220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600±10		0,23±0,02	0,20±0,02
					0,24±0,02	0,21±0,02
					0,25±0,02	0,22±0,02
					0,26±0,02	0,23±0,02
					0,27±0,02	0,24±0,02
					0,28±0,02	0,25±0,02
					0,29±0,02	0,26±0,02
					0,30±0,02	0,27±0,02
					0,31±0,02	0,28±0,02
					0,32±0,02	0,29±0,02
					0,33±0,02	0,30±0,02
					0,34±0,02	0,31±0,02
					0,35±0,02	0,32±0,02
					0,36±0,02	0,33±0,02
					0,37±0,02	0,34±0,02
					0,38±0,02	0,35±0,02
					0,39±0,02	0,36±0,02
					0,40±0,02	0,37±0,02
						0,38±0,02
						0,39±0,02
						0,40±0,02
Супер-большие (XXL)	Естественный цвет, белый, жёлтый, слоноvia кость, синий, зелёный	Обрезана	217, 227, 237, 247, 257, 267, 277, 287, 297, 307, 317, 327, 337, 347, 357, 367, 377, 387, 397, 407, 417, 427, 437, 447, 457, 467, 477, 487, 497, 507, 517, 527, 537, 547, 557, 567, 577, 587, 597±10	A=15±1 B=36±2 C=54±3	0,11±0,02	0,08±0,02
					0,12±0,02	0,09±0,02
					0,13±0,02	0,10±0,02
					0,14±0,02	0,11±0,02
					0,15±0,02	0,12±0,02
					0,16±0,02	0,13±0,02
					0,17±0,02	0,14±0,02
					0,18±0,02	0,15±0,02
					0,19±0,02	0,16±0,02
					0,20±0,02	0,17±0,02
					0,21±0,02	0,18±0,02
					0,22±0,02	0,19±0,02

	, голубой, черный, коричневый	Закатана в венчик	220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600±10		0,23±0,02	0,20±0,02
					0,24±0,02	0,21±0,02
					0,25±0,02	0,22±0,02
					0,26±0,02	0,23±0,02
					0,27±0,02	0,24±0,02
					0,28±0,02	0,25±0,02
					0,29±0,02	0,26±0,02
					0,30±0,02	0,27±0,02
					0,31±0,02	0,28±0,02
					0,32±0,02	0,29±0,02
					0,33±0,02	0,30±0,02
					0,34±0,02	0,31±0,02
					0,35±0,02	0,32±0,02
					0,36±0,02	0,33±0,02
					0,37±0,02	0,34±0,02
					0,38±0,02	0,35±0,02
					0,39±0,02	0,36±0,02
					0,40±0,02	0,37±0,02
						0,38±0,02
						0,39±0,02
						0,40±0,02

Примечания:

- 1 Длину перчатки измеряют по кратчайшему расстоянию от кончика среднего пальца до края манжеты.
- 2 Ширину перчатки измеряют на плоской поверхности через среднюю точку между основаниями указательного и большого пальцев.
- 3 Толщину двух стенок неповрежденной перчатки (рисунок 2) измеряют в соответствии с требованиями ИСО 4648 толщиномером с давлением на основание (22±5) кПа, на расстоянии (13±3) мм от вершины среднего пальца, точно в центре ладони. Толщина одной стенки в каждой точке, равная половине толщины двух стенок, должна соответствовать установленной норме.
- 4 Толщина венчика перчатки, измеренная в соответствии с ИСО 4648, должна быть не более 2,5 мм

100

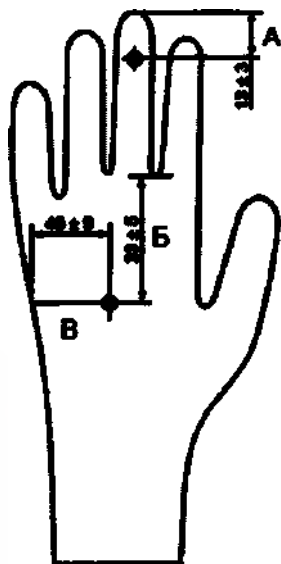

Р и с у н о к 2 - Точки измерения толщины стенки перчатки

П р и м е ч а н и е - Расстояние (48 ± 9) мм показывает положение центра ладони для перчаток разного размера.

В зависимости от прочностных свойств при растяжении перчатки могут быть отнесены к типу I.

Перчатки должны быть пятипальными, бесшовными, с краями, закатанными в венчик, или обрезанными, а по форме соответствовать объемной модели руки и изготавливаться **без** **разделения на правую и левую.**

Поверхность должна быть неопудренной.

Манжета перчаток может быть обрезана или закатана в венчик.

Перчатки должны быть герметичны.

Текстурированный рисунок должен быть нанесен на всю поверхность пальцев и ладони перчаток.

На поверхности перчаток не должно быть дефектов, превышающих указанные в таблице 3.

Таблица 3

Наименование дефекта	Проверяемая часть перчатки	
	Пальцы (рабочая поверхность), межпальцевые промежутки, ладонная часть	Тыльная часть, крага
Посторонние включения	не допускаются	допускаются на краге
Пузыри	не допускаются	не допускаются диаметром более 1 мм
Включения коагулюма	не допускаются	допускаются с гладкими краями
Складки	не допускаются	допускаются
Потёки	не допускаются	допускаются
Проколы, отверстия	не допускаются	не допускаются

Прочностные свойства перчаток должны соответствовать таблице 4.

Физико-механические показатели перчаток до и после ускоренного старения должны соответствовать нормам, указанным в таблице 5.

Таблица 4

Характеристика	Значение
Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0
Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650
Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0
Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500

Таблица 5

Наименование показателя	Норма	
	до ускоренного старения	после ускоренного старения
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	18,0 (тип I)	14,0
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	650	500

Масса перчаток должна соответствовать таблице 6.

102

Таблица 6

Наглядный размер	Длина, мм	Толщина, мм		Масса одной перчатки, г
		Гладкая поверхность	Текстурированная поверхность	
Супер-малые (XXS)	220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300	0,08±0,02	-	2,8±0,5
		0,09±0,02	-	3,2±0,6
		0,10±0,02	-	3,5±0,7
		0,11±0,02	0,11±0,02	3,9±0,7
		0,12±0,02	0,12±0,02	4,2±0,8
		0,13±0,02	0,13±0,02	4,6±0,9
		0,14±0,02	0,14±0,02	5,0±1,0
		0,15±0,02	0,15±0,02	5,3±1,0
		0,16±0,02	0,16±0,02	5,7±1,1
		0,17±0,02	0,17±0,02	6,0±1,2
		0,18±0,02	0,18±0,02	6,4±1,2
		0,19±0,02	0,19±0,02	6,7±1,3
		0,20±0,02	0,20±0,02	7,1±1,4
		0,21±0,02	0,21±0,02	7,5±1,5
		0,22±0,02	0,22±0,02	7,8±1,5
		0,23±0,02	0,23±0,02	8,2±1,6
		0,24±0,02	0,24±0,02	8,5±1,7
		0,25±0,02	0,25±0,02	8,9±1,7
		0,26±0,02	0,26±0,02	9,2±1,8
		0,27±0,02	0,27±0,02	9,6±1,9
		0,28±0,02	0,28±0,02	10±2,0
		0,29±0,02	0,29±0,02	10,3±2,0
		0,30±0,02	0,30±0,02	10,7±2,1
		0,31±0,02	0,31±0,02	11,0±2,2
		0,32±0,02	0,32±0,02	11,4±2,2
		0,33±0,02	0,33±0,02	11,7±2,3
		0,34±0,02	0,34±0,02	12,1±2,4
		0,35±0,02	0,35±0,02	12,5±2,5
		0,36±0,02	0,36±0,02	12,8±2,5
		0,37±0,02	0,37±0,02	13,2±2,6
		0,38±0,02	0,38±0,02	13,5±2,7
		0,39±0,02	0,39±0,02	13,9±2,7
		0,40±0,02	0,40±0,02	14,2±2,8
	310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400	0,08±0,02	-	3,3±0,6
		0,09±0,02	-	3,8±0,7
		0,10±0,02	-	4,2±0,8
		0,11±0,02	0,11±0,02	4,6±0,9
		0,12±0,02	0,12±0,02	5,0±1,0
		0,13±0,02	0,13±0,02	5,5±1,1
		0,14±0,02	0,14±0,02	6,0±1,2
		0,15±0,02	0,15±0,02	6,3±1,2
		0,16±0,02	0,16±0,02	6,8±1,3
		0,17±0,02	0,17±0,02	7,2±1,4

		0,18±0,02	0,18±0,02	7,6±1,5
		0,19±0,02	0,19±0,02	8,0±1,6
		0,20±0,02	0,20±0,02	8,5±1,7
		0,21±0,02	0,21±0,02	9,0±1,8
		0,22±0,02	0,22±0,02	9,3±1,8
		0,23±0,02	0,23±0,02	9,8±1,9
		0,24±0,02	0,24±0,02	10,2±2,0
		0,25±0,02	0,25±0,02	10,6±2,1
		0,26±0,02	0,26±0,02	11,0±2,2
		0,27±0,02	0,27±0,02	11,5±2,3
		0,28±0,02	0,28±0,02	12,0±2,4
		0,29±0,02	0,29±0,02	12,3±2,4
		0,30±0,02	0,30±0,02	12,8±2,5
		0,31±0,02	0,31±0,02	13,2±2,6
		0,32±0,02	0,32±0,02	13,6±2,7
		0,33±0,02	0,33±0,02	14,0±2,8
		0,34±0,02	0,34±0,02	14,5±2,9
		0,35±0,02	0,35±0,02	15,0±3,0
		0,36±0,02	0,36±0,02	15,3±3,0
		0,37±0,02	0,37±0,02	15,8±3,1
		0,38±0,02	0,38±0,02	16,2±3,2
		0,39±0,02	0,39±0,02	16,6±3,3
		0,40±0,02	0,40±0,02	17,0±3,4
	410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500	0,08±0,02	-	3,9±0,7
		0,09±0,02	-	4,4±0,8
		0,10±0,02	-	4,9±0,9
		0,11±0,02	0,11±0,02	5,4±1,0
		0,12±0,02	0,12±0,02	5,8±1,1
		0,13±0,02	0,13±0,02	6,4±1,2
		0,14±0,02	0,14±0,02	7±1,4
		0,15±0,02	0,15±0,02	7,4±1,4
		0,16±0,02	0,16±0,02	7,9±1,5
		0,17±0,02	0,17±0,02	8,4±1,6
		0,18±0,02	0,18±0,02	8,9±1,7
		0,19±0,02	0,19±0,02	9,3±1,8
		0,20±0,02	0,20±0,02	9,9±1,9
		0,21±0,02	0,21±0,02	10,5±2,1
		0,22±0,02	0,22±0,02	10,9±2,1
		0,23±0,02	0,23±0,02	11,4±2,2
		0,24±0,02	0,24±0,02	11,9±2,3
		0,25±0,02	0,25±0,02	12,4±2,4
		0,26±0,02	0,26±0,02	12,8±2,5
		0,27±0,02	0,27±0,02	13,4±2,6
		0,28±0,02	0,28±0,02	14±2,8
		0,29±0,02	0,29±0,02	14,4±2,8
		0,30±0,02	0,30±0,02	14,9±2,9
		0,31±0,02	0,31±0,02	15,4±3,0
		0,32±0,02	0,32±0,02	15,9±3,1
		0,33±0,02	0,33±0,02	16,3±3,2
		0,34±0,02	0,34±0,02	16,9±3,3

104

		0,35±0,02	0,35±0,02	17,5±3,5
		0,36±0,02	0,36±0,02	17,9±3,5
		0,37±0,02	0,37±0,02	18,4±3,6
		0,38±0,02	0,38±0,02	18,9±3,7
		0,39±0,02	0,39±0,02	19,4±3,8
		0,40±0,02	0,40±0,02	19,8±3,9
	510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600	0,08±0,02	-	4,4±0,8
		0,09±0,02	-	5,1±1,0
		0,10±0,02	-	5,6±1,1
		0,11±0,02	0,11±0,02	6,2±1,2
		0,12±0,02	0,12±0,02	6,7±1,3
		0,13±0,02	0,13±0,02	7,3±1,4
		0,14±0,02	0,14±0,02	8,0±1,6
		0,15±0,02	0,15±0,02	8,4±1,6
		0,16±0,02	0,16±0,02	9,1±1,8
		0,17±0,02	0,17±0,02	9,6±1,9
		0,18±0,02	0,18±0,02	10,2±2,0
		0,19±0,02	0,19±0,02	10,7±2,1
		0,20±0,02	0,20±0,02	11,3±2,2
		0,21±0,02	0,21±0,02	12,0±2,4
		0,22±0,02	0,22±0,02	12,4±2,4
		0,23±0,02	0,23±0,02	13,1±2,6
		0,24±0,02	0,24±0,02	13,6±2,7
		0,25±0,02	0,25±0,02	14,2±2,8
		0,26±0,02	0,26±0,02	14,7±2,9
		0,27±0,02	0,27±0,02	15,3±3,0
		0,28±0,02	0,28±0,02	16,0±3,2
		0,29±0,02	0,29±0,02	16,4±3,2
		0,30±0,02	0,30±0,02	17,1±3,4
		0,31±0,02	0,31±0,02	17,6±3,5
		0,32±0,02	0,32±0,02	18,2±3,6
		0,33±0,02	0,33±0,02	18,7±3,7
		0,34±0,02	0,34±0,02	19,3±3,8
		0,35±0,02	0,35±0,02	20,0±4,0
		0,36±0,02	0,36±0,02	20,4±4,0
		0,37±0,02	0,37±0,02	21,1±4,2
		0,38±0,02	0,38±0,02	21,6±4,3
		0,39±0,02	0,39±0,02	22,2±4,4
		0,40±0,02	0,40±0,02	22,7±4,5
Сверхмалые (XS)	220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300	0,08±0,02	-	3,0±0,6
		0,09±0,02	-	3,4±0,6
		0,10±0,02	-	3,8±0,7
		0,11±0,02	0,11±0,02	4,2±0,8
		0,12±0,02	0,12±0,02	4,6±0,9
		0,13±0,02	0,13±0,02	5,0±1,0
		0,14±0,02	0,14±0,02	5,4±1,0
		0,15±0,02	0,15±0,02	5,7±1,1
		0,16±0,02	0,16±0,02	6,1±1,2
		0,17±0,02	0,17±0,02	6,5±1,3
		0,18±0,02	0,18±0,02	6,9±1,3

105

		0,19±0,02	0,19±0,02	7,3±1,4
		0,20±0,02	0,20±0,02	7,7±1,5
		0,21±0,02	0,21±0,02	8,1±1,6
		0,22±0,02	0,22±0,02	8,4±1,6
		0,23±0,02	0,23±0,02	8,8±1,7
		0,24±0,02	0,24±0,02	9,2±1,8
		0,25±0,02	0,25±0,02	9,6±1,9
		0,26±0,02	0,26±0,02	10,0±2,0
		0,27±0,02	0,27±0,02	10,4±2,0
		0,28±0,02	0,28±0,02	10,8±2,1
		0,29±0,02	0,29±0,02	11,1±2,2
		0,30±0,02	0,30±0,02	11,5±2,3
		0,31±0,02	0,31±0,02	11,9±2,3
		0,32±0,02	0,32±0,02	12,3±2,4
		0,33±0,02	0,33±0,02	12,7±2,5
		0,34±0,02	0,34±0,02	13,1±2,6
		0,35±0,02	0,35±0,02	13,5±2,7
		0,36±0,02	0,36±0,02	13,8±2,7
		0,37±0,02	0,37±0,02	14,2±2,8
		0,38±0,02	0,38±0,02	14,6±2,9
		0,39±0,02	0,39±0,02	15,0±3,0
		0,40±0,02	0,40±0,02	15,4±3,0
	310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400	0,08±0,02	-	3,6±0,7
		0,09±0,02	-	4,0±0,8
		0,10±0,02	-	4,5±0,9
		0,11±0,02	0,11±0,02	5,0±1,0
		0,12±0,02	0,12±0,02	5,5±1,1
		0,13±0,02	0,13±0,02	6,0±1,2
		0,14±0,02	0,14±0,02	6,4±1,2
		0,15±0,02	0,15±0,02	6,8±1,3
		0,16±0,02	0,16±0,02	7,3±1,4
		0,17±0,02	0,17±0,02	7,8±1,5
		0,18±0,02	0,18±0,02	8,2±1,6
		0,19±0,02	0,19±0,02	8,7±1,7
		0,20±0,02	0,20±0,02	9,2±1,8
		0,21±0,02	0,21±0,02	9,7±1,9
		0,22±0,02	0,22±0,02	10,0±2,0
		0,23±0,02	0,23±0,02	10,5±2,1
		0,24±0,02	0,24±0,02	11,0±2,2
		0,25±0,02	0,25±0,02	11,5±2,3
		0,26±0,02	0,26±0,02	12,0±2,4
		0,27±0,02	0,27±0,02	12,4±2,4
		0,28±0,02	0,28±0,02	12,9±2,5
		0,29±0,02	0,29±0,02	13,3±2,6
		0,30±0,02	0,30±0,02	13,8±2,7
		0,31±0,02	0,31±0,02	14,2±2,8
		0,32±0,02	0,32±0,02	14,7±2,9
		0,33±0,02	0,33±0,02	15,2±3,0
		0,34±0,02	0,34±0,02	15,7±3,1
		0,35±0,02	0,35±0,02	16,2±3,2

		0,36±0,02	0,36±0,02	16,5±3,3
		0,37±0,02	0,37±0,02	17,0±3,4
		0,38±0,02	0,38±0,02	17,5±3,5
		0,39±0,02	0,39±0,02	18,0±3,6
		0,40±0,02	0,40±0,02	18,4±3,6
	410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500	0,08±0,02	-	4,2±0,8
		0,09±0,02	-	4,7±0,9
		0,10±0,02	-	5,3±1,0
		0,11±0,02	0,11±0,02	5,8±1,1
		0,12±0,02	0,12±0,02	6,4±1,2
		0,13±0,02	0,13±0,02	7,0±1,4
		0,14±0,02	0,14±0,02	7,5±1,5
		0,15±0,02	0,15±0,02	7,9±1,5
		0,16±0,02	0,16±0,02	8,5±1,7
		0,17±0,02	0,17±0,02	9,1±1,8
		0,18±0,02	0,18±0,02	9,6±1,9
		0,19±0,02	0,19±0,02	10,2±2,0
		0,20±0,02	0,20±0,02	10,7±2,1
		0,21±0,02	0,21±0,02	11,3±2,2
		0,22±0,02	0,22±0,02	11,7±2,3
		0,23±0,02	0,23±0,02	12,3±2,4
		0,24±0,02	0,24±0,02	12,8±2,5
		0,25±0,02	0,25±0,02	13,4±2,6
		0,26±0,02	0,26±0,02	14,0±2,8
		0,27±0,02	0,27±0,02	14,5±2,9
		0,28±0,02	0,28±0,02	15,1±3,0
		0,29±0,02	0,29±0,02	15,5±3,1
		0,30±0,02	0,30±0,02	16,1±3,2
		0,31±0,02	0,31±0,02	16,6±3,3
		0,32±0,02	0,32±0,02	17,2±3,4
		0,33±0,02	0,33±0,02	17,7±3,5
		0,34±0,02	0,34±0,02	18,3±3,6
		0,35±0,02	0,35±0,02	18,9±3,7
		0,36±0,02	0,36±0,02	19,3±3,8
		0,37±0,02	0,37±0,02	19,8±3,9
		0,38±0,02	0,38±0,02	20,4±4,0
		0,39±0,02	0,39±0,02	21,0±4,2
		0,40±0,02	0,40±0,02	21,5±4,3
	510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600	0,08±0,02	-	4,8±0,9
		0,09±0,02	-	5,4±1,0
		0,10±0,02	-	6,0±1,2
		0,11±0,02	0,11±0,02	6,7±1,3
		0,12±0,02	0,12±0,02	7,3±1,4
		0,13±0,02	0,13±0,02	8,0±1,6
		0,14±0,02	0,14±0,02	8,6±1,7
		0,15±0,02	0,15±0,02	9,1±1,8
		0,16±0,02	0,16±0,02	9,7±1,9
		0,17±0,02	0,17±0,02	10,4±2,0
		0,18±0,02	0,18±0,02	11,0±2,2
		0,19±0,02	0,19±0,02	11,6±2,3

		0,20±0,02	0,20±0,02	12,3±2,4
		0,21±0,02	0,21±0,02	12,9±2,5
		0,22±0,02	0,22±0,02	13,4±2,6
		0,23±0,02	0,23±0,02	14,0±2,8
		0,24±0,02	0,24±0,02	14,7±2,9
		0,25±0,02	0,25±0,02	15,3±3,0
		0,26±0,02	0,26±0,02	16,0±3,2
		0,27±0,02	0,27±0,02	16,6±3,3
		0,28±0,02	0,28±0,02	17,2±3,4
		0,29±0,02	0,29±0,02	17,7±3,5
		0,30±0,02	0,30±0,02	18,4±3,6
		0,31±0,02	0,31±0,02	19,0±3,8
		0,32±0,02	0,32±0,02	19,6±3,9
		0,33±0,02	0,33±0,02	20,3±4,0
		0,34±0,02	0,34±0,02	20,9±4,1
		0,35±0,02	0,35±0,02	21,6±4,3
		0,36±0,02	0,36±0,02	22,0±4,4
		0,37±0,02	0,37±0,02	22,7±4,5
		0,38±0,02	0,38±0,02	23,3±4,6
		0,39±0,02	0,39±0,02	24,0±4,8
		0,40±0,02	0,40±0,02	24,6±4,9
Маленькие (S)	220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300	0,08±0,02	-	3,3±0,6
		0,09±0,02	-	3,7±0,7
		0,10±0,02	-	4,1±0,8
		0,11±0,02	0,11±0,02	4,5±0,9
		0,12±0,02	0,12±0,02	4,9±0,9
		0,13±0,02	0,13±0,02	5,3±1,0
		0,14±0,02	0,14±0,02	5,8±1,1
		0,15±0,02	0,15±0,02	6,2±1,2
		0,16±0,02	0,16±0,02	6,6±1,3
		0,17±0,02	0,17±0,02	7,0±1,4
		0,18±0,02	0,18±0,02	7,4±1,4
		0,19±0,02	0,19±0,02	7,8±1,5
		0,20±0,02	0,20±0,02	8,2±1,6
		0,21±0,02	0,21±0,02	8,7±1,7
		0,22±0,02	0,22±0,02	9,1±1,8
		0,23±0,02	0,23±0,02	9,5±1,9
		0,24±0,02	0,24±0,02	9,9±1,9
		0,25±0,02	0,25±0,02	10,3±2,0
		0,26±0,02	0,26±0,02	10,7±2,1
		0,27±0,02	0,27±0,02	11,1±2,2
		0,28±0,02	0,28±0,02	11,6±2,3
		0,29±0,02	0,29±0,02	12,0±2,4
		0,30±0,02	0,30±0,02	12,4±2,4
		0,31±0,02	0,31±0,02	12,8±2,5
		0,32±0,02	0,32±0,02	13,2±2,6
		0,33±0,02	0,33±0,02	13,6±2,7
		0,34±0,02	0,34±0,02	14,0±2,8
		0,35±0,02	0,35±0,02	14,5±2,9
		0,36±0,02	0,36±0,02	14,9±2,9

		0,37±0,02	0,37±0,02	15,3±3,0
		0,38±0,02	0,38±0,02	15,7±3,1
		0,39±0,02	0,39±0,02	16,1±3,2
		0,40±0,02	0,40±0,02	16,5±3,3
310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400		0,08±0,02	-	3,9±0,7
		0,09±0,02	-	4,4±0,8
		0,10±0,02	-	4,9±0,9
		0,11±0,02	0,11±0,02	5,4±1,0
		0,12±0,02	0,12±0,02	5,8±1,1
		0,13±0,02	0,13±0,02	6,3±1,2
		0,14±0,02	0,14±0,02	6,9±1,3
		0,15±0,02	0,15±0,02	7,4±1,4
		0,16±0,02	0,16±0,02	7,9±1,5
		0,17±0,02	0,17±0,02	8,4±1,6
		0,18±0,02	0,18±0,02	8,8±1,7
		0,19±0,02	0,19±0,02	9,3±1,8
		0,20±0,02	0,20±0,02	9,8±1,9
		0,21±0,02	0,21±0,02	10,4±2,0
		0,22±0,02	0,22±0,02	10,9±2,1
		0,23±0,02	0,23±0,02	11,4±2,2
		0,24±0,02	0,24±0,02	11,8±2,3
		0,25±0,02	0,25±0,02	12,3±2,4
		0,26±0,02	0,26±0,02	12,8±2,5
		0,27±0,02	0,27±0,02	13,3±2,6
		0,28±0,02	0,28±0,02	13,9±2,7
		0,29±0,02	0,29±0,02	14,4±2,8
		0,30±0,02	0,30±0,02	14,8±2,9
		0,31±0,02	0,31±0,02	15,3±3,0
		0,32±0,02	0,32±0,02	15,8±3,1
		0,33±0,02	0,33±0,02	16,3±3,2
		0,34±0,02	0,34±0,02	16,8±3,3
		0,35±0,02	0,35±0,02	17,4±3,4
		0,36±0,02	0,36±0,02	17,8±3,5
		0,37±0,02	0,37±0,02	18,3±3,6
		0,38±0,02	0,38±0,02	18,8±3,7
		0,39±0,02	0,39±0,02	19,3±3,8
		0,40±0,02	0,40±0,02	19,8±3,9
410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500		0,08±0,02	-	4,6±0,9
		0,09±0,02	-	5,1±1,0
		0,10±0,02	-	5,7±1,1
		0,11±0,02	0,11±0,02	6,3±1,2
		0,12±0,02	0,12±0,02	6,8±1,3
		0,13±0,02	0,13±0,02	7,4±1,4
		0,14±0,02	0,14±0,02	8,1±1,6
		0,15±0,02	0,15±0,02	8,6±1,7
		0,16±0,02	0,16±0,02	9,2±1,8
		0,17±0,02	0,17±0,02	9,8±1,9
		0,18±0,02	0,18±0,02	10,3±2,0
		0,19±0,02	0,19±0,02	10,9±2,1
		0,20±0,02	0,20±0,02	11,4±2,2

		0,21±0,02	0,21±0,02	12,1±2,4
		0,22±0,02	0,22±0,02	12,7±2,5
		0,23±0,02	0,23±0,02	13,3±2,6
		0,24±0,02	0,24±0,02	13,8±2,7
		0,25±0,02	0,25±0,02	14,4±2,8
		0,26±0,02	0,26±0,02	14,9±2,9
		0,27±0,02	0,27±0,02	15,5±3,1
		0,28±0,02	0,28±0,02	16,2±3,2
		0,29±0,02	0,29±0,02	16,8±3,3
		0,30±0,02	0,30±0,02	17,3±3,4
		0,31±0,02	0,31±0,02	17,9±3,5
		0,32±0,02	0,32±0,02	18,4±3,6
		0,33±0,02	0,33±0,02	19,0±3,8
		0,34±0,02	0,34±0,02	19,6±3,9
		0,35±0,02	0,35±0,02	20,3±4,0
		0,36±0,02	0,36±0,02	20,8±4,1
		0,37±0,02	0,37±0,02	21,4±4,2
		0,38±0,02	0,38±0,02	21,9±4,3
		0,39±0,02	0,39±0,02	22,5±4,5
		0,40±0,02	0,40±0,02	23,1±4,6
	510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600	0,08±0,02	-	5,2±1,0
		0,09±0,02	-	5,9±1,1
		0,10±0,02	-	6,5±1,3
		0,11±0,02	0,11±0,02	7,2±1,4
		0,12±0,02	0,12±0,02	7,8±1,5
		0,13±0,02	0,13±0,02	8,4±1,6
		0,14±0,02	0,14±0,02	9,2±1,8
		0,15±0,02	0,15±0,02	9,9±1,9
		0,16±0,02	0,16±0,02	10,5±2,1
		0,17±0,02	0,17±0,02	11,2±2,2
		0,18±0,02	0,18±0,02	11,8±2,3
		0,19±0,02	0,19±0,02	12,4±2,4
		0,20±0,02	0,20±0,02	13,1±2,6
		0,21±0,02	0,21±0,02	13,9±2,7
		0,22±0,02	0,22±0,02	14,5±2,9
		0,23±0,02	0,23±0,02	15,2±3,0
		0,24±0,02	0,24±0,02	15,8±3,1
		0,25±0,02	0,25±0,02	16,4±3,2
		0,26±0,02	0,26±0,02	17,1±3,4
		0,27±0,02	0,27±0,02	17,7±3,5
		0,28±0,02	0,28±0,02	18,5±3,7
		0,29±0,02	0,29±0,02	19,2±3,8
		0,30±0,02	0,30±0,02	19,8±3,9
		0,31±0,02	0,31±0,02	20,4±4,0
		0,32±0,02	0,32±0,02	21,1±4,2
		0,33±0,02	0,33±0,02	21,7±4,3
		0,34±0,02	0,34±0,02	22,4±4,4
		0,35±0,02	0,35±0,02	23,2±4,6
		0,36±0,02	0,36±0,02	23,8±4,7
		0,37±0,02	0,37±0,02	24,4±4,8

		0,38±0,02	0,38±0,02	25,1±5,0
		0,39±0,02	0,39±0,02	25,7±5,1
		0,40±0,02	0,40±0,02	26,4±5,2
		0,08±0,02	-	3,5±0,7
Средние (М)	230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300	0,09±0,02	-	3,9±0,7
		0,10±0,02	-	4,4±0,8
		0,11±0,02	0,11±0,02	4,8±0,9
		0,12±0,02	0,12±0,02	5,3±1,0
		0,13±0,02	0,13±0,02	5,7±1,1
		0,14±0,02	0,14±0,02	6,2±1,2
		0,15±0,02	0,15±0,02	6,6±1,3
		0,16±0,02	0,16±0,02	7,0±1,4
		0,17±0,02	0,17±0,02	7,5±1,5
		0,18±0,02	0,18±0,02	7,9±1,5
		0,19±0,02	0,19±0,02	8,4±1,6
		0,20±0,02	0,20±0,02	8,8±1,7
		0,21±0,02	0,21±0,02	9,3±1,8
		0,22±0,02	0,22±0,02	9,7 ±1,9
		0,23±0,02	0,23±0,02	10,1±2,0
		0,24±0,02	0,24±0,02	10,6±2,1
		0,25±0,02	0,25±0,02	11,0±2,2
		0,26±0,02	0,26±0,02	11,5±2,3
		0,27±0,02	0,27±0,02	11,9±2,3
		0,28±0,02	0,28±0,02	12,4±2,4
		0,29±0,02	0,29±0,02	12,8±2,5
		0,30±0,02	0,30±0,02	13,2±2,6
		0,31±0,02	0,31±0,02	13,7±2,7
		0,32±0,02	0,32±0,02	14,1±2,8
		0,33±0,02	0,33±0,02	14,6±2,9
		0,34±0,02	0,34±0,02	15,0±3,0
		0,35±0,02	0,35±0,02	15,5±3,1
		0,36±0,02	0,36±0,02	15,9±3,1
		0,37±0,02	0,37±0,02	16,3±3,2
		0,38±0,02	0,38±0,02	16,8±3,3
		0,39±0,02	0,39±0,02	17,2±3,4
		0,40±0,02	0,40±0,02	17,7±3,5
	310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400	0,08±0,02	-	4,2±0,8
		0,09±0,02	-	4,6±0,9
		0,10±0,02	-	5,2±1,0
		0,11±0,02	0,11±0,02	5,7±1,1
		0,12±0,02	0,12±0,02	6,3±1,2
		0,13±0,02	0,13±0,02	6,8±1,3
		0,14±0,02	0,14±0,02	7,4±1,4
		0,15±0,02	0,15±0,02	7,9±1,5
		0,16±0,02	0,16±0,02	8,4±1,6
		0,17±0,02	0,17±0,02	9,0±1,8
		0,18±0,02	0,18±0,02	9,4±1,8
		0,19±0,02	0,19±0,02	10,0±2,0
		0,20±0,02	0,20±0,02	10,5±2,1
		0,21±0,02	0,21±0,02	11,1±2,2

		0,22±0,02	0,22±0,02	11,6±2,3
		0,23±0,02	0,23±0,02	12,1±2,4
		0,24±0,02	0,24±0,02	12,7±2,5
		0,25±0,02	0,25±0,02	13,2±2,6
		0,26±0,02	0,26±0,02	13,8±2,7
		0,27±0,02	0,27±0,02	14,2±2,8
		0,28±0,02	0,28±0,02	14,8±2,9
		0,29±0,02	0,29±0,02	15,3±3,0
		0,30±0,02	0,30±0,02	15,8±3,1
		0,31±0,02	0,31±0,02	16,4±3,2
		0,32±0,02	0,32±0,02	16,9±3,3
		0,33±0,02	0,33±0,02	17,5±3,5
		0,34±0,02	0,34±0,02	18,0±3,6
		0,35±0,02	0,35±0,02	18,6±3,7
		0,36±0,02	0,36±0,02	19,0±3,8
		0,37±0,02	0,37±0,02	19,5±3,9
		0,38±0,02	0,38±0,02	20,1±4,0
		0,39±0,02	0,39±0,02	20,6±4,1
		0,40±0,02	0,40±0,02	21,2±4,2
	410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500	0,08±0,02	-	4,9±0,9
		0,09±0,02	-	5,4±1,0
		0,10±0,02	-	6,1±1,2
		0,11±0,02	0,11±0,02	6,7±1,3
		0,12±0,02	0,12±0,02	7,4±1,4
		0,13±0,02	0,13±0,02	7,9±1,5
		0,14±0,02	0,14±0,02	8,6±1,7
		0,15±0,02	0,15±0,02	9,2±1,8
		0,16±0,02	0,16±0,02	9,8±1,9
		0,17±0,02	0,17±0,02	10,5±2,1
		0,18±0,02	0,18±0,02	11,0±2,2
		0,19±0,02	0,19±0,02	11,7±2,3
		0,20±0,02	0,20±0,02	12,3±2,4
		0,21±0,02	0,21±0,02	13,0±2,6
		0,22±0,02	0,22±0,02	13,5±2,7
		0,23±0,02	0,23±0,02	14,1±2,8
		0,24±0,02	0,24±0,02	14,8±2,9
		0,25±0,02	0,25±0,02	15,4±3,0
		0,26±0,02	0,26±0,02	16,1±3,2
		0,27±0,02	0,27±0,02	16,6±3,3
		0,28±0,02	0,28±0,02	17,3±3,4
		0,29±0,02	0,29±0,02	17,9±3,5
		0,30±0,02	0,30±0,02	18,4±3,6
		0,31±0,02	0,31±0,02	19,1±3,8
		0,32±0,02	0,32±0,02	19,7±3,9
		0,33±0,02	0,33±0,02	20,4±4,0
		0,34±0,02	0,34±0,02	21,0±4,2
		0,35±0,02	0,35±0,02	21,7±4,3
		0,36±0,02	0,36±0,02	22,2±4,4
		0,37±0,02	0,37±0,02	22,8±4,5
		0,38±0,02	0,38±0,02	23,5±4,7

		0,39±0,02	0,39±0,02	24,0±4,8
		0,40±0,02	0,40±0,02	24,7±4,9
	510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600	0,08±0,02	-	5,6±1,1
		0,09±0,02	-	6,2±1,2
		0,10±0,02	-	7,0±1,4
		0,11±0,02	0,11±0,02	7,6±1,5
		0,12±0,02	0,12±0,02	8,4±1,6
		0,13±0,02	0,13±0,02	9,1±1,8
		0,14±0,02	0,14±0,02	9,9±1,9
		0,15±0,02	0,15±0,02	10,5±2,1
		0,16±0,02	0,16±0,02	11,2±2,2
		0,17±0,02	0,17±0,02	12,0±2,4
		0,18±0,02	0,18±0,02	12,6±2,5
		0,19±0,02	0,19±0,02	13,4±2,6
		0,20±0,02	0,20±0,02	14,0±2,8
		0,21±0,02	0,21±0,02	14,8±2,9
		0,22±0,02	0,22±0,02	15,5±3,1
		0,23±0,02	0,23±0,02	16,1±3,2
		0,24±0,02	0,24±0,02	16,9±3,3
		0,25±0,02	0,25±0,02	17,6±3,5
		0,26±0,02	0,26±0,02	18,4±3,6
		0,27±0,02	0,27±0,02	19,0±3,8
		0,28±0,02	0,28±0,02	19,8±3,9
		0,29±0,02	0,29±0,02	20,4±4,0
		0,30±0,02	0,30±0,02	21,1±4,2
		0,31±0,02	0,31±0,02	21,9±4,3
		0,32±0,02	0,32±0,02	22,5±4,5
		0,33±0,02	0,33±0,02	23,3±4,6
		0,34±0,02	0,34±0,02	24,0±4,8
		0,35±0,02	0,35±0,02	24,8±4,9
		0,36±0,02	0,36±0,02	25,4±5,0
		0,37±0,02	0,37±0,02	26,0±5,2
		0,38±0,02	0,38±0,02	26,8±5,3
		0,39±0,02	0,39±0,02	27,5±5,5
		0,40±0,02	0,40±0,02	28,3±5,6
Большие (L)	230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300	0,08±0,02	-	3,7±0,7
		0,09±0,02	-	4,2±0,8
		0,10±0,02	-	4,7±0,9
		0,11±0,02	0,11±0,02	5,1±1,0
		0,12±0,02	0,12±0,02	5,6±1,1
		0,13±0,02	0,13±0,02	6,1±1,2
		0,14±0,02	0,14±0,02	6,6±1,3
		0,15±0,02	0,15±0,02	7,0±1,4
		0,16±0,02	0,16±0,02	7,5±1,5
		0,17±0,02	0,17±0,02	8,0±1,6
		0,18±0,02	0,18±0,02	8,4±1,6
		0,19±0,02	0,19±0,02	8,9±1,7
		0,20±0,02	0,20±0,02	9,4±1,8
		0,21±0,02	0,21±0,02	9,9±1,9
		0,22±0,02	0,22±0,02	10,3±2,0

		0,23±0,02	0,23±0,02	10,8±2,1
		0,24±0,02	0,24±0,02	11,3±2,2
		0,25±0,02	0,25±0,02	11,7±2,3
		0,26±0,02	0,26±0,02	12,2±2,4
		0,27±0,02	0,27±0,02	12,7±2,5
		0,28±0,02	0,28±0,02	13,2±2,6
		0,29±0,02	0,29±0,02	13,6±2,7
		0,30±0,02	0,30±0,02	14,1±2,8
		0,31±0,02	0,31±0,02	14,6±2,9
		0,32±0,02	0,32±0,02	15,0±3,0
		0,33±0,02	0,33±0,02	15,5±3,1
		0,34±0,02	0,34±0,02	16,0±3,2
		0,35±0,02	0,35±0,02	16,5±3,3
		0,36±0,02	0,36±0,02	16,9±3,3
		0,37±0,02	0,37±0,02	17,4±3,4
		0,38±0,02	0,38±0,02	17,9±3,5
		0,39±0,02	0,39±0,02	18,3±3,6
		0,40±0,02	0,40±0,02	18,8±3,7
	310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400	0,08±0,02	-	4,4±0,8
		0,09±0,02	-	5,0±1,0
		0,10±0,02	-	5,6±1,1
		0,11±0,02	0,11±0,02	6,1±1,2
		0,12±0,02	0,12±0,02	6,7±1,3
		0,13±0,02	0,13±0,02	7,3±1,4
		0,14±0,02	0,14±0,02	7,9±1,5
		0,15±0,02	0,15±0,02	8,4±1,6
		0,16±0,02	0,16±0,02	9,0±1,8
		0,17±0,02	0,17±0,02	9,6±1,9
		0,18±0,02	0,18±0,02	10,0±2,0
		0,19±0,02	0,19±0,02	10,6±2,1
		0,20±0,02	0,20±0,02	11,2±2,2
		0,21±0,02	0,21±0,02	11,8±2,3
		0,22±0,02	0,22±0,02	12,3±2,4
		0,23±0,02	0,23±0,02	12,9±2,5
		0,24±0,02	0,24±0,02	13,5±2,7
		0,25±0,02	0,25±0,02	14,0±2,8
		0,26±0,02	0,26±0,02	14,6±2,9
		0,27±0,02	0,27±0,02	15,2±3,0
		0,28±0,02	0,28±0,02	15,8±3,1
		0,29±0,02	0,29±0,02	16,3±3,2
		0,30±0,02	0,30±0,02	16,9±3,3
		0,31±0,02	0,31±0,02	17,5±3,5
		0,32±0,02	0,32±0,02	18,0±3,6
		0,33±0,02	0,33±0,02	18,6±3,7
		0,34±0,02	0,34±0,02	19,2±3,8
		0,35±0,02	0,35±0,02	19,8±3,9
		0,36±0,02	0,36±0,02	20,2±4,0
		0,37±0,02	0,37±0,02	20,8±4,1
		0,38±0,02	0,38±0,02	21,4±4,2
		0,39±0,02	0,39±0,02	21,9±4,3

410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500	0,40±0,02	0,40±0,02	22,5±4,5
	0,08±0,02	-	5,1±1,0
	0,09±0,02	-	5,8±1,1
	0,10±0,02	-	6,5±1,3
	0,11±0,02	0,11±0,02	7,1±1,4
	0,12±0,02	0,12±0,02	7,8±1,5
	0,13±0,02	0,13±0,02	8,5±1,7
	0,14±0,02	0,14±0,02	9,2±1,8
	0,15±0,02	0,15±0,02	9,8±1,9
	0,16±0,02	0,16±0,02	10,5±2,1
	0,17±0,02	0,17±0,02	11,2±2,2
	0,18±0,02	0,18±0,02	11,7±2,3
	0,19±0,02	0,19±0,02	12,4±2,4
	0,20±0,02	0,20±0,02	13,1±2,6
	0,21±0,02	0,21±0,02	13,8±2,7
	0,22±0,02	0,22±0,02	14,4±2,8
	0,23±0,02	0,23±0,02	15,1±3,0
	0,24±0,02	0,24±0,02	15,8±3,1
	0,25±0,02	0,25±0,02	16,3±3,2
	0,26±0,02	0,26±0,02	17,0±3,4
	0,27±0,02	0,27±0,02	17,7±3,5
	0,28±0,02	0,28±0,02	18,4±3,6
	0,29±0,02	0,29±0,02	19,0±3,8
	0,30±0,02	0,30±0,02	19,7±3,9
	0,31±0,02	0,31±0,02	20,4±4,0
	0,32±0,02	0,32±0,02	21,0±4,2
	0,33±0,02	0,33±0,02	21,7±4,3
	0,34±0,02	0,34±0,02	22,4±4,4
	0,35±0,02	0,35±0,02	23,1±4,6
	0,36±0,02	0,36±0,02	23,6±4,7
	0,37±0,02	0,37±0,02	24,3±4,8
	0,38±0,02	0,38±0,02	25,0±5,0
	0,39±0,02	0,39±0,02	25,6±5,1
	0,40±0,02	0,40±0,02	26,3±5,2
510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600	0,08±0,02	-	5,9±1,1
	0,09±0,02	-	6,7±1,3
	0,10±0,02	-	7,5±1,5
	0,11±0,02	0,11±0,02	8,1±1,6
	0,12±0,02	0,12±0,02	8,9±1,7
	0,13±0,02	0,13±0,02	9,7±1,9
	0,14±0,02	0,14±0,02	10,5±2,1
	0,15±0,02	0,15±0,02	11,2±2,2
	0,16±0,02	0,16±0,02	12,0±2,4
	0,17±0,02	0,17±0,02	12,8±2,5
	0,18±0,02	0,18±0,02	13,4±2,6
	0,19±0,02	0,19±0,02	14,2±2,8
	0,20±0,02	0,20±0,02	15,0±3,0
	0,21±0,02	0,21±0,02	15,8±3,1
	0,22±0,02	0,22±0,02	16,4±3,2
	0,23±0,02	0,23±0,02	17,2±3,4

115

		0,24±0,02	0,24±0,02	18,0±3,6
		0,25±0,02	0,25±0,02	18,7±3,7
		0,26±0,02	0,26±0,02	19,5±3,9
		0,27±0,02	0,27±0,02	20,3±4,0
		0,28±0,02	0,28±0,02	21,1±4,2
		0,29±0,02	0,29±0,02	21,7±4,3
		0,30±0,02	0,30±0,02	22,5±4,5
		0,31±0,02	0,31±0,02	23,3±4,6
		0,32±0,02	0,32±0,02	24,0±4,8
		0,33±0,02	0,33±0,02	24,8±4,9
		0,34±0,02	0,34±0,02	25,6±5,1
		0,35±0,02	0,35±0,02	26,4±5,2
		0,36±0,02	0,36±0,02	27,0±5,4
		0,37±0,02	0,37±0,02	27,8±5,5
		0,38±0,02	0,38±0,02	28,6±5,7
		0,39±0,02	0,39±0,02	29,2±5,8
		0,40±0,02	0,40±0,02	30,0±6,0
Сверхбольшие (XL)	230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300	0,08±0,02	-	4,0±0,8
		0,09±0,02	-	4,5±0,9
		0,10±0,02	-	5,0±1,0
		0,11±0,02	0,11±0,02	5,5±1,1
		0,12±0,02	0,12±0,02	6,0±1,2
		0,13±0,02	0,13±0,02	6,5±1,3
		0,14±0,02	0,14±0,02	7,0±1,4
		0,15±0,02	0,15±0,02	7,5±1,5
		0,16±0,02	0,16±0,02	8,0±1,6
		0,17±0,02	0,17±0,02	8,5±1,7
		0,18±0,02	0,18±0,02	9,0±1,8
		0,19±0,02	0,19±0,02	9,5±1,9
		0,20±0,02	0,20±0,02	10,0±2,0
		0,21±0,02	0,21±0,02	10,5±2,1
		0,22±0,02	0,22±0,02	11,0±2,2
		0,23±0,02	0,23±0,02	11,5±2,3
		0,24±0,02	0,24±0,02	12,0±2,4
		0,25±0,02	0,25±0,02	12,5±2,5
		0,26±0,02	0,26±0,02	13,0±2,6
		0,27±0,02	0,27±0,02	13,5±2,7
		0,28±0,02	0,28±0,02	14,0±2,8
		0,29±0,02	0,29±0,02	14,5±2,9
		0,30±0,02	0,30±0,02	15,0±3,0
		0,31±0,02	0,31±0,02	15,5±3,1
		0,32±0,02	0,32±0,02	16,0±3,2
		0,33±0,02	0,33±0,02	16,5±3,3
		0,34±0,02	0,34±0,02	17,0±3,4
		0,35±0,02	0,35±0,02	17,5±3,5
		0,36±0,02	0,36±0,02	18,0±3,6
		0,37±0,02	0,37±0,02	18,5±3,7
		0,38±0,02	0,38±0,02	19,0±3,8
		0,39±0,02	0,39±0,02	19,5±3,9
		0,40±0,02	0,40±0,02	20,0±4,0

310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400	0,08±0,02	-	4,8±0,9
	0,09±0,02	-	5,4±1,0
	0,10±0,02	-	6,0±1,2
	0,11±0,02	0,11±0,02	6,6±1,3
	0,12±0,02	0,12±0,02	7,2±1,4
	0,13±0,02	0,13±0,02	7,8±1,5
	0,14±0,02	0,14±0,02	8,4±1,6
	0,15±0,02	0,15±0,02	9,0±1,8
	0,16±0,02	0,16±0,02	9,6±1,9
	0,17±0,02	0,17±0,02	10,2±2,0
	0,18±0,02	0,18±0,02	10,8±2,1
	0,19±0,02	0,19±0,02	11,4±2,2
	0,20±0,02	0,20±0,02	12,0±2,4
	0,21±0,02	0,21±0,02	12,6±2,5
	0,22±0,02	0,22±0,02	13,2±2,6
	0,23±0,02	0,23±0,02	13,8±2,7
	0,24±0,02	0,24±0,02	14,4±2,8
	0,25±0,02	0,25±0,02	15,0±3,0
	0,26±0,02	0,26±0,02	15,6±3,1
	0,27±0,02	0,27±0,02	16,2±3,2
	0,28±0,02	0,28±0,02	16,8±3,3
	0,29±0,02	0,29±0,02	17,4±3,4
	0,30±0,02	0,30±0,02	18,0±3,6
	0,31±0,02	0,31±0,02	18,6±3,7
	0,32±0,02	0,32±0,02	19,2±3,8
	0,33±0,02	0,33±0,02	19,8±3,9
	0,34±0,02	0,34±0,02	20,4±4,0
	0,35±0,02	0,35±0,02	21,0±4,2
	0,36±0,02	0,36±0,02	21,6±4,3
	0,37±0,02	0,37±0,02	22,2±4,4
	0,38±0,02	0,38±0,02	22,8±4,5
	0,39±0,02	0,39±0,02	23,4±4,6
	0,40±0,02	0,40±0,02	24,0±4,8
410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500	0,08±0,02	-	5,6±1,1
	0,09±0,02	-	6,3±1,2
	0,10±0,02	-	7,0±1,4
	0,11±0,02	0,11±0,02	7,7±1,5
	0,12±0,02	0,12±0,02	8,4±1,6
	0,13±0,02	0,13±0,02	9,1±1,8
	0,14±0,02	0,14±0,02	9,8±1,9
	0,15±0,02	0,15±0,02	10,5±2,1
	0,16±0,02	0,16±0,02	11,2±2,2
	0,17±0,02	0,17±0,02	11,9±2,3
	0,18±0,02	0,18±0,02	12,6±2,5
	0,19±0,02	0,19±0,02	13,3±2,6
	0,20±0,02	0,20±0,02	14,0±2,8
	0,21±0,02	0,21±0,02	14,7±2,9
	0,22±0,02	0,22±0,02	15,4±3,0
	0,23±0,02	0,23±0,02	16,1±3,2
	0,24±0,02	0,24±0,02	16,8±3,3

		0,25±0,02	0,25±0,02	17,5±3,5
		0,26±0,02	0,26±0,02	18,2±3,6
		0,27±0,02	0,27±0,02	18,9±3,7
		0,28±0,02	0,28±0,02	19,6±3,9
		0,29±0,02	0,29±0,02	20,3±4,0
		0,30±0,02	0,30±0,02	21,0±4,2
		0,31±0,02	0,31±0,02	21,7±4,3
		0,32±0,02	0,32±0,02	22,4±4,4
		0,33±0,02	0,33±0,02	23,1±4,6
		0,34±0,02	0,34±0,02	23,8±4,7
		0,35±0,02	0,35±0,02	24,5±4,9
		0,36±0,02	0,36±0,02	25,2±5,0
		0,37±0,02	0,37±0,02	25,9±5,1
		0,38±0,02	0,38±0,02	26,6±5,3
		0,39±0,02	0,39±0,02	27,3±5,4
		0,40±0,02	0,40±0,02	28,0±5,6
	510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600	0,08±0,02	-	6,4±1,2
		0,09±0,02	-	7,2±1,4
		0,10±0,02	-	8,0±1,6
		0,11±0,02	0,11±0,02	8,8±1,7
		0,12±0,02	0,12±0,02	9,6±1,9
		0,13±0,02	0,13±0,02	10,4±2,0
		0,14±0,02	0,14±0,02	11,2±2,2
		0,15±0,02	0,15±0,02	12,0±2,4
		0,16±0,02	0,16±0,02	12,8±2,5
		0,17±0,02	0,17±0,02	13,6±2,7
		0,18±0,02	0,18±0,02	14,4±2,8
		0,19±0,02	0,19±0,02	15,2±3,0
		0,20±0,02	0,20±0,02	16,0±3,2
		0,21±0,02	0,21±0,02	16,8±3,3
		0,22±0,02	0,22±0,02	17,6±3,5
		0,23±0,02	0,23±0,02	18,4±3,6
		0,24±0,02	0,24±0,02	19,2±3,8
		0,25±0,02	0,25±0,02	20,0±4,0
		0,26±0,02	0,26±0,02	20,8±4,1
		0,27±0,02	0,27±0,02	21,6±4,3
		0,28±0,02	0,28±0,02	22,4±4,4
		0,29±0,02	0,29±0,02	23,2±4,6
		0,30±0,02	0,30±0,02	24,0±4,8
		0,31±0,02	0,31±0,02	24,8±4,9
		0,32±0,02	0,32±0,02	25,6±5,1
		0,33±0,02	0,33±0,02	26,4±5,2
		0,34±0,02	0,34±0,02	27,2±5,4
		0,35±0,02	0,35±0,02	28,0±5,6
		0,36±0,02	0,36±0,02	28,8±5,7
		0,37±0,02	0,37±0,02	29,6±5,9
		0,38±0,02	0,38±0,02	30,4±6,0
		0,39±0,02	0,39±0,02	31,2±6,2
		0,40±0,02	0,40±0,02	32,0±6,4
Супер-большие	230, 240, 250,	0,08±0,02	-	4,2±0,8

(XXL)	260, 270, 280, 290, 300	0,09±0,02	-	4,7±0,9
		0,10±0,02	-	5,2±1,0
		0,11±0,02	0,11±0,02	5,8±1,1
		0,12±0,02	0,12±0,02	6,3±1,2
		0,13±0,02	0,13±0,02	6,8±1,3
		0,14±0,02	0,14±0,02	7,4±1,4
		0,15±0,02	0,15±0,02	7,9±1,5
		0,16±0,02	0,16±0,02	8,4±1,6
		0,17±0,02	0,17±0,02	8,9±1,7
		0,18±0,02	0,18±0,02	9,5±1,9
		0,19±0,02	0,19±0,02	10,0±2,0
		0,20±0,02	0,20±0,02	10,5±2,1
		0,21±0,02	0,21±0,02	11,1±2,2
		0,22±0,02	0,22±0,02	11,6±2,3
		0,23±0,02	0,23±0,02	12,1±2,4
		0,24±0,02	0,24±0,02	12,6±2,5
		0,25±0,02	0,25±0,02	13,2±2,6
		0,26±0,02	0,26±0,02	13,7±2,7
		0,27±0,02	0,27±0,02	14,2±2,8
		0,28±0,02	0,28±0,02	14,8±2,9
		0,29±0,02	0,29±0,02	15,3±3,0
		0,30±0,02	0,30±0,02	15,8±3,1
		0,31±0,02	0,31±0,02	16,3±3,2
		0,32±0,02	0,32±0,02	16,9±3,3
		0,33±0,02	0,33±0,02	17,4±3,4
		0,34±0,02	0,34±0,02	17,9±3,5
		0,35±0,02	0,35±0,02	18,5±3,7
		0,36±0,02	0,36±0,02	19,0±3,8
		0,37±0,02	0,37±0,02	19,5±3,9
		0,38±0,02	0,38±0,02	20,0±4,0
		0,39±0,02	0,39±0,02	20,6±4,1
		0,40±0,02	0,40±0,02	21,1±4,2
	310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400	0,08±0,02	-	5,0±1,0
		0,09±0,02	-	5,6±1,1
		0,10±0,02	-	6,2±1,2
		0,11±0,02	0,11±0,02	6,9±1,3
		0,12±0,02	0,12±0,02	7,5±1,5
		0,13±0,02	0,13±0,02	8,1±1,6
		0,14±0,02	0,14±0,02	8,8±1,7
		0,15±0,02	0,15±0,02	9,4±1,8
		0,16±0,02	0,16±0,02	10,0±2,0
		0,17±0,02	0,17±0,02	10,6±2,1
		0,18±0,02	0,18±0,02	11,4±2,2
		0,19±0,02	0,19±0,02	12,0±2,4
		0,20±0,02	0,20±0,02	12,6±2,5
		0,21±0,02	0,21±0,02	13,3±2,6
		0,22±0,02	0,22±0,02	13,9±2,7
		0,23±0,02	0,23±0,02	14,5±2,9
		0,24±0,02	0,24±0,02	15,1±3,0
		0,25±0,02	0,25±0,02	15,8±3,1

		0,26±0,02	0,26±0,02	16,4±3,2
		0,27±0,02	0,27±0,02	17,0±3,4
		0,28±0,02	0,28±0,02	17,7±3,5
		0,29±0,02	0,29±0,02	18,3±3,6
		0,30±0,02	0,30±0,02	18,9±3,7
		0,31±0,02	0,31±0,02	19,5±3,9
		0,32±0,02	0,32±0,02	20,2±4,0
		0,33±0,02	0,33±0,02	20,8±4,1
		0,34±0,02	0,34±0,02	21,4±4,2
		0,35±0,02	0,35±0,02	22,2±4,4
		0,36±0,02	0,36±0,02	22,8±4,5
		0,37±0,02	0,37±0,02	23,4±4,6
		0,38±0,02	0,38±0,02	24,0±4,8
		0,39±0,02	0,39±0,02	24,7±4,9
		0,40±0,02	0,40±0,02	25,3±5,0
	410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500	0,08±0,02	-	5,8±1,1
		0,09±0,02	-	6,5±1,3
		0,10±0,02	-	7,2±1,4
		0,11±0,02	0,11±0,02	8,1±1,6
		0,12±0,02	0,12±0,02	8,8±1,7
		0,13±0,02	0,13±0,02	9,5±1,9
		0,14±0,02	0,14±0,02	10,3±2,0
		0,15±0,02	0,15±0,02	11,0±2,2
		0,16±0,02	0,16±0,02	11,7±2,3
		0,17±0,02	0,17±0,02	12,4±2,4
		0,18±0,02	0,18±0,02	13,3±2,6
		0,19±0,02	0,19±0,02	14,0±2,8
		0,20±0,02	0,20±0,02	14,7±2,9
		0,21±0,02	0,21±0,02	15,5±3,1
		0,22±0,02	0,22±0,02	16,2±3,2
		0,23±0,02	0,23±0,02	16,9±3,3
		0,24±0,02	0,24±0,02	17,6±3,5
		0,25±0,02	0,25±0,02	18,4±3,6
		0,26±0,02	0,26±0,02	19,1±3,8
		0,27±0,02	0,27±0,02	19,8±3,9
	510, 520, 530, 540, 550, 560,	0,28±0,02	0,28±0,02	20,7±4,1
		0,29±0,02	0,29±0,02	21,4±4,2
		0,30±0,02	0,30±0,02	22,1±4,4
		0,31±0,02	0,31±0,02	22,8±4,5
		0,32±0,02	0,32±0,02	23,6±4,7
		0,33±0,02	0,33±0,02	24,3±4,8
		0,34±0,02	0,34±0,02	25,0±5,0
		0,35±0,02	0,35±0,02	25,9±5,1
		0,36±0,02	0,36±0,02	26,6±5,3
		0,37±0,02	0,37±0,02	27,3±5,4
		0,38±0,02	0,38±0,02	28,0±5,6
		0,39±0,02	0,39±0,02	28,8±5,7
		0,40±0,02	0,40±0,02	29,5±5,9
		0,08±0,02	-	6,7±1,3
		0,09±0,02	-	7,5±1,5

	570, 580, 590, 600	0,10±0,02	-	8,3±1,6
		0,11±0,02	0,11±0,02	9,2±1,8
		0,12±0,02	0,12±0,02	10,0±2,0
		0,13±0,02	0,13±0,02	10,8±2,1
		0,14±0,02	0,14±0,02	11,8±2,3
		0,15±0,02	0,15±0,02	12,6±2,5
		0,16±0,02	0,16±0,02	13,4±2,6
		0,17±0,02	0,17±0,02	14,2±2,8
		0,18±0,02	0,18±0,02	15,2±3,0
		0,19±0,02	0,19±0,02	16,0±3,2
		0,20±0,02	0,20±0,02	16,8±3,3
		0,21±0,02	0,21±0,02	17,7±3,5
		0,22±0,02	0,22±0,02	18,5±3,7
		0,23±0,02	0,23±0,02	19,3±3,8
		0,24±0,02	0,24±0,02	20,1±4,0
		0,25±0,02	0,25±0,02	21,1±4,2
		0,26±0,02	0,26±0,02	21,9±4,3
		0,27±0,02	0,27±0,02	22,7±4,5
		0,28±0,02	0,28±0,02	23,6±4,7
		0,29±0,02	0,29±0,02	24,4±4,8
		0,30±0,02	0,30±0,02	25,2±5,0
		0,31±0,02	0,31±0,02	26,0±5,2
		0,32±0,02	0,32±0,02	27,0±5,4
		0,33±0,02	0,33±0,02	27,8±5,5
		0,34±0,02	0,34±0,02	28,6±5,7
		0,35±0,02	0,35±0,02	29,6±5,9
		0,36±0,02	0,36±0,02	30,4±6,0
		0,37±0,02	0,37±0,02	31,2±6,2
		0,38±0,02	0,38±0,02	32,0±6,4
		0,39±0,02	0,39±0,02	32,9±6,5
		0,40±0,02	0,40±0,02	33,7±6,7

Остаточное опудривающее вещество должно составлять не более 2,0 мг на одну перчатку.

Содержание водорастворимого протеина должно быть не более 200 мкг/дм².

Для изготовления перчаток должны применяться красители на водной основе, производства фирмы Farben Technique (M) Sdn Bhd, Малайзия: белый марки FARSPERSE, серии WHITE, артикульный номер PW-603; жёлтый марки FARSPERSE, серии YELLOW, артикульный номер PY1406; слоновая кость марки FARSPERSE, серии IVORY, артикульный номер PI204; синий марки FARSPERSE, серии BLUE, артикульный номер PL1508; зеленый марки FARSPERSE, серии GREEN, артикульный номер PG707; голубой марки FARSPERSE, серии BLUE, артикульный номер PB1105; черный марки FARSPERSE, серии BLACK, артикульный номер PB705; коричневый марки FARSPERSE, серии BROWN, артикульный номер PB1408.

7. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Супер-малые (XXS)	0-250 шт.
- Сверхмалые (XS)	0-250 шт.
- Маленькие (S)	0-250 шт.
- Средние (M)	0-250 шт.
- Большие (L)	0-250 шт.
- Сверхбольшие (XL)	0-250 шт.
- Супер-большие (XXL)	0-250 шт.
- Инструкция по применению	1 шт.

Примечание: Перчатки поставляются по-отдельности на правую и левую руку, либо комплектуются парно.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Каждый медицинский работник, зная особенности выполняемой им работы должен самостоятельно сформулировать требования к перчаткам с учетом:

- реальных производственных рисков (оценка биологических рисков, оценка механических рисков, оценка химических рисков);
- состояния кожи рук медицинского работника, аллергологического анамнеза работника и пациента и ряда других факторов.

Необходимо подбирать перчатки нужного размера.

Необходимо подбирать перчатки в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук.

При надевании перчаток не должно прилагаться больших усилий.

После снятия перчаток необходимо вымыть руки с мылом и обработать спиртосодержащим кожным антисептиком.

После выполнения манипуляции перчатки повторно не использовать.

Не использовать после истечения срока хранения.

Перчатки после транспортирования в условиях отрицательных температур выдерживают перед применением при температуре плюс (20+5) 0С не менее 24 часов.

9. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перчатки должны быть пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ 4.2 климата по ГОСТ 15150, при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности до 98% при температуре 25 °С.

В части стойкости к действию внешних механических факторов перчатки должны соответствовать группе 3 ГОСТ Р 50444.

10. МАРКИРОВКА

Перчатки маркируют по ГОСТ Р 52239; символы и знаки маркировки – по ГОСТ Р ИСО 15223-1 и ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Упаковка нестерильных перчаток должна содержать:

- наименование или торговая марка изготовителя или поставщика;
- использованный материал;
- слова "ГЛАДКИЕ", "НЕОПУДРЕННЫЕ";
- размер;
- номер партии;
- слово "ОДНОРАЗОВЫЕ";
- слово "НЕСТЕРИЛЬНЫЕ";
- слова "ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ";
- слова "ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ", а также год цифрами четырех разрядов и месяц изготовления;
- слова "Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию".
- масса нетто;
- гарантийный срок хранения;
- отметка технического контроля (штамп ОТК) о соответствии изделий требованиям настоящих технических условий;

Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474, с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги» и «Беречь от солнечных лучей».

Маркировку наносят методом штампования, типографским или иным пригодным способом. Маркировка должна быть четкой и легко читаемой.

Допускается наносить другие информационные данные, включая рекламного характера.

Перчатки не классифицируются по ГОСТ 19433 как опасный груз. Маркировка в части их опасности для человека и окружающей среды – по ГОСТ 31340.

11. УПАКОВКА

Продукция должна быть упакована способом, обеспечивающим её сохранность при перевозке и хранении, и исключающим попадание на неё загрязняющих веществ.

Указания по упаковке – ГОСТ Р 52239, ГОСТ Р 50444/ГОСТ 20790 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 769).

Перчатки должны укладываться в потребительскую упаковку по ГОСТ 12302 из полиэтилена по ГОСТ 16337, ГОСТ 16338.

Перчатки в потребительской упаковке могут укладываться в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13514, которые оклеиваются липкой лентой.

Масса брутто ящика не должна превышать 10 кг.

Допускается применять другие виды упаковочных средств, в т. ч. изготавливаемые по чертежам предприятия-производителя перчаток, обеспечивающие их сохранность.

Поставка перчаток должна сопровождаться товарной документацией и упаковочным листом, уложенными в пакет из полиэтиленовой пленки.

При отгрузке перчаток в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности маркировка и упаковка должны производиться с учетом указаний ГОСТ 15846.

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование перчаток осуществляется любым видом крытого транспорта при условии их защиты от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузку и разгрузку продукции осуществляют по ГОСТ 12.3.009.

Способ погрузки и разгрузки должен исключать повреждение перчаток.

Условия транспортирования – по группе 2 ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 40° С.

При перевозке перчаток в температурных условиях ниже минус 30 °С не допускается воздействие на них ударных нагрузок или их деформация.

Перчатки хранят в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах, при температуре от 0 °С до плюс 25 °С и относительной влажности не более 85%, защищенными от действия прямых солнечных лучей, при отсутствии в окружающем воздухе паров солей, кислот и прочих вредных примесей, на расстоянии не менее 1 м от отопительной системы и теплоизлучающих приборов.

Допускается хранить перчатки при температуре не выше плюс 40 °С в течение не более 2 месяцев.

Не допускается совместное хранение перчаток с маслами, бензином, керосином и другими веществами, разрушающими резину.

13. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При изготовлении перчаток отходы, представляющие опасность для человека и окружающей среды, не образуются. Технические и промывные воды после очистки возвращаются в начало технологического цикла.

Перчатки при обращении и использовании по назначению не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, не обладают способностью образовывать токсические соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ и факторов при температуре окружающей среды.

Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате –

- аварийных утечек или россыпей производственных материалов;
- неорганизованного захоронения отходов на территории предприятия-изготовителя или вне его;
- произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.

Перчатки и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после её окончания.

Отходы латекса относятся к 4 классу (малоопасные) согласно СП 2.1.7.1386.

Отработанные отходы (брак, отсеvy сырья) утилизируются в соответствии с порядком накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № М 52-ФЗ от 30.03.1999, ст. 22 и СанПиН 2.1.7.1322-03.

При утилизации отходов материалов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04.

Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

Не пригодные к использованию перчатки должны быть направлены во вторсырьё или на городскую свалку.

Допускается утилизацию отходов в процессе производства осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей соответствующую лицензию.

Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и загрязнения почвы контролируют в соответствии с ГН 2.1.6.1315-03, ГН 2.1.6.1338-03, МУ 2.1.7.730 и «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий». Сточные воды должны соответствовать СанПиН 2.1.5.980-00.

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения перчаток – 3 года со дня изготовления.

Перчатки не подлежат вторичному использованию. Запрещается использование по истечении срока хранения.

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Перчатки утилизируются в медицинских учреждениях согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 (класс В).

Не использованные перчатки специальных мер предосторожности при уничтожении не имеют.

По вопросам утилизации обращаться: ООО «Универсалмедсервис», Юр. адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 57, лит. А, пом. 1Н, тел: 8 (812) 325 56 82

16. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметка о продаже

Категория изделия _____

Производитель _____

Штамп
продавца

Дата продажи _____

Организация продавец _____

Подпись продавца _____

Изделие проверено, повреждений не имеет.

С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

Гарантийный срок хранения – 3 года.

По вопросам гарантии обращаться: ООО «Универсалмедсервис», Юр. адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 57, лит. А, пом. 1Н, тел: 8 (812) 325 56 82

ВНИМАНИЕ! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Все графы талона (за исключением граф для производителя/поставщика) должны быть заполнены. При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.

Генеральный директор



Прошито
Пронумеровано
Скреплено печатью
110 листа (ов)

