

ООО «ЭР ОПТИКС»

Фактический адрес 123182, Россия, г. Москва, ул. Живописная, д. 46,
Юридический адрес 103030, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр. 2
Email адрес : roptics@garnet.ru, Телефон 725-77-34; 725-77-35, Факс 741-59-09


Руководство Пользователя

Кресла и скамейки операционные с принадлежностями



ОПЕРАЦИОННОЕ КРЕСЛО

С Н-ОБРАЗНОЙ
РАМОЙ И НОЖНЫМ
ТОРМОЗОМ

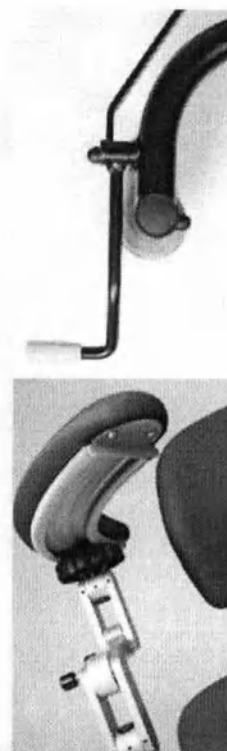

СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ


ОПЕРАЦИОННОЕ КРЕСЛО

Это удобное в эксплуатации медицинское кресло с ножным тормозом оптимизировано для использования в условиях операционной. Н-образная рама делает это кресло особенно устойчивым и идеальным для проведения микрохирургических операций. Эргономичный дизайн кресла позволяет врачу сидеть и работать в правильном положении, без риска перенапряжения или периодических травм вследствие чрезмерной нагрузки.

Управление такими важными функциями, как тормоз и регулировка высоты, осуществляется при помощи ножных педалей. Кресло оборудовано подлокотниками, специально разработанными компанией "Rini" с учетом требований безопасности для операций, в ходе которых врач выполняет манипуляции обеими руками. Такие упоры для рук позволяют избежать случайных движений в ходе выполнения процедуры.

Кресло оснащено колесами большого диаметра, которые облегчают его передвижение, а ножной фиксатор задних колес обеспечивает неподвижность кресла на месте. Угол сиденья и спинки можно отрегулировать одновременно одним легким движением. Внутренний угол спинки регулируется автоматически.



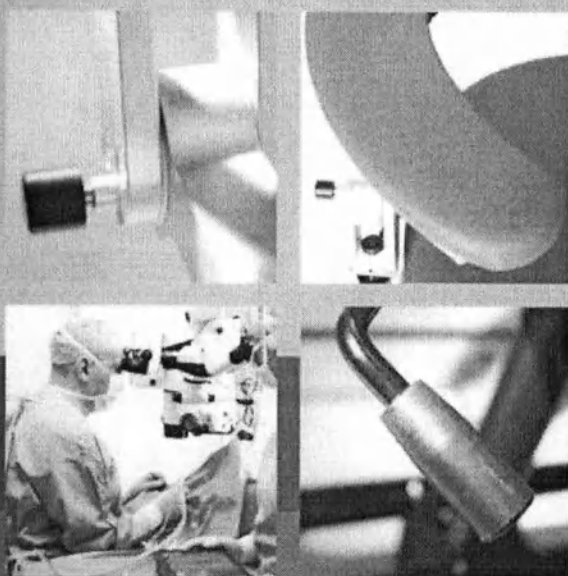

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Длина без педали тормоза	580 мм
Ширина без педали тормоза	530 мм

ОПОРА ДЛЯ СПИНЫ (СПИНКА)



Длина	300 мм
Ширина	350 мм
Диапазон регулировки	-10°/+18°
Регулировка высоты по отношению к сиденью	40-160 мм
Саморегулируемый угол наклона	0°/+25°

СИДЕНЬЕ

Длина	420 мм
Ширина	460 мм
Диапазон регулировки	-14°/+3°
Регулировка высоты над уровнем пола	560-700 мм

ПРОЧЕЕ

Допустимая нагрузка	120 кг/265 фунт.
Вес	25 кг/55 фунт

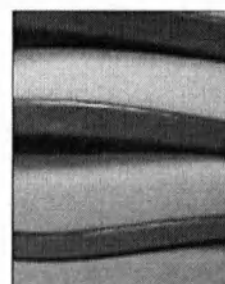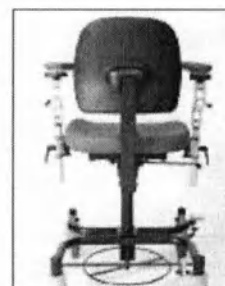

«Rini Ergoteknik AB», Круфорнсваген, 20А
 SE-192 53 г.Соллентуна, Швеция
 Телефон +46 8 594 771 70 Факс +46 8 92 92 79
 info@rini.se www.rini.se

ОПЕРАЦИОННОЕ КРЕСЛО

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ


ОПЕРАЦИОННОЕ КРЕСЛО

Данное электроприводное кресло предназначено для использования в микрохирургии. Конструкция кресла разрабатывалась в сотрудничестве со шведскими и зарубежными хирургами с целью обеспечения высокого качества работ, проводимых в операционной, и максимально возможных функциональных характеристик оборудования. Эргономичный дизайн кресла облегчает работу врача, позволяя избегать периодических травм вследствие чрезмерной нагрузки, перенапряжения и мышечной усталости.

Данное электроприводное кресло третьего поколения отличается большей устойчивостью по сравнению с предыдущими моделями не в последнюю очередь благодаря более широкой ходовой части. Кроме того, кресло оснащено большими колесами, за счет чего значительно улучшена его маневренность. Обеспечен удобный доступ к ножному тормозу, для нажатия или освобождения которого требуется меньше усилий по сравнению с предыдущими моделями. Местоположение педали электроприводного механизма регулировки высоты выбрано таким образом, чтобы полностью исключить возможность ее случайного нажатия и приведения тем самым механизма в действие.

Кресло оборудовано подлокотниками, специально разработанными компанией "Rini" с учетом требований безопасности для операций, в ходе которых врач выполняет манипуляции обеими руками. Такие упоры для рук позволяют избежать случайных движений в ходе выполнения процедуры. Кресло может принимать различные положения, что делает его практически универсальным. Внутренний угол спинки регулируется автоматически, а угол сиденья и спинки можно отрегулировать одновременно одним легким движением.



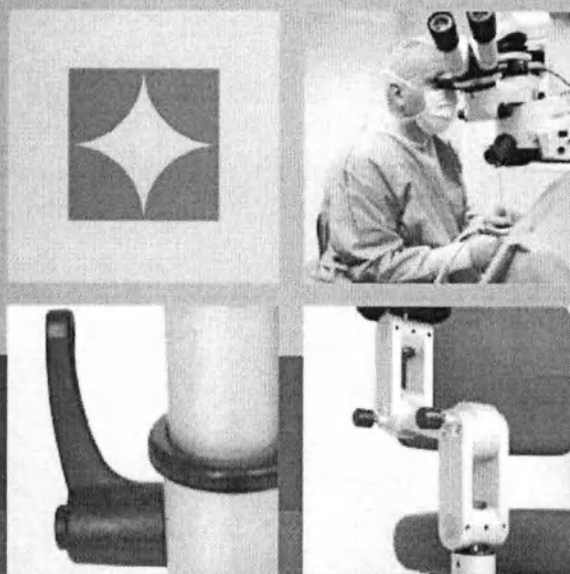

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Длина без педали тормоза	580 мм
Ширина без педали тормоза	530 мм

ОПОРА ДЛЯ СПИНЫ (СПИНКА)

Длина	300 мм
Ширина	350 мм
Диапазон регулировки	-10°/+18°
Регулировка высоты по отношению к сиденью	40-160 мм
Саморегулируемый угол наклона	0°/+25°

СИДЕНЬЕ

Длина	420 мм
Ширина	460 мм
Диапазон регулировки	-14°/+3°
Регулировка высоты над уровнем пола	500-800 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-

Работа от аккумулятора	24 В
Подзарядка	100-240 В, 50/60 Гц

ПРОЧЕЕ

Допустимая нагрузка	120 кг/265 фунт.
Вес	37 кг/82 фунт



«Rini Ergoteknik AB», Круфорнсваген, 20А
 SE-192 53 г.Соллентуна, Швеция
 Телефон +46 8 594 771 70 Факс +46 8 92 92 79
 info@rini.se www.rini.se

ОПЕРАЦИОННОЕ КРЕСЛО

С НОЖНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ




СДЕЛАНО В ШВЕЦИИ

ОПЕРАЦИОННОЕ КРЕСЛО

Благодаря своей эргономичной конструкции, данная модель медицинского кресла идеально подходит для работы в операционной. Это кресло сочетает в себе высокую маневренность и полный контроль над функциональными возможностями. Эргономичный дизайн кресла облегчает работу врача, позволяя избегать периодических травм вследствие чрезмерной нагрузки, перенапряжения и мышечной усталости.

Данная модель – это полностью настраиваемое под требуемые параметры кресло с ножным механизмом регулировки высоты. Кресло оборудовано подлокотниками, специально разработанными компанией "Rini" с учетом требований безопасности для операций, в ходе которых врач выполняет манипуляции обеими руками. Такие упоры для рук позволяют избежать случайных движений в ходе выполнения процедуры. Угол сиденья и спинки можно отрегулировать одновременно одним легким движением. Внутренний угол спинки регулируется автоматически.



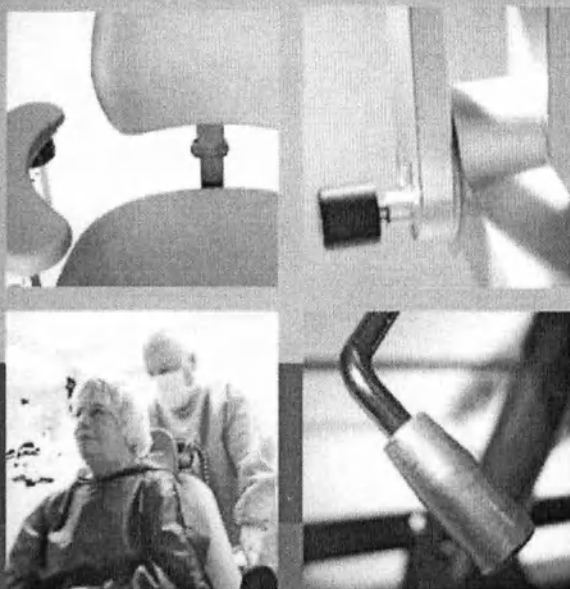

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ширина	600 мм
--------	--------

ОПОРА ДЛЯ СПИНЫ (СПИНКА)


Длина	300 мм
Ширина	350 мм
Диапазон регулировки	-10°/+18°
Регулировка высоты по отношению к сиденью	40-160 мм
Саморегулируемый угол наклона	0°/+25°

СИДЕНЬЕ

Длина	420 мм
Ширина	460 мм
Диапазон регулировки	-14°/+3°
Регулировка высоты над уровнем пола	560-700 мм

ПРОЧЕЕ

Допустимая нагрузка	120 кг/265 фунт.
Вес	19 кг/42 фунт

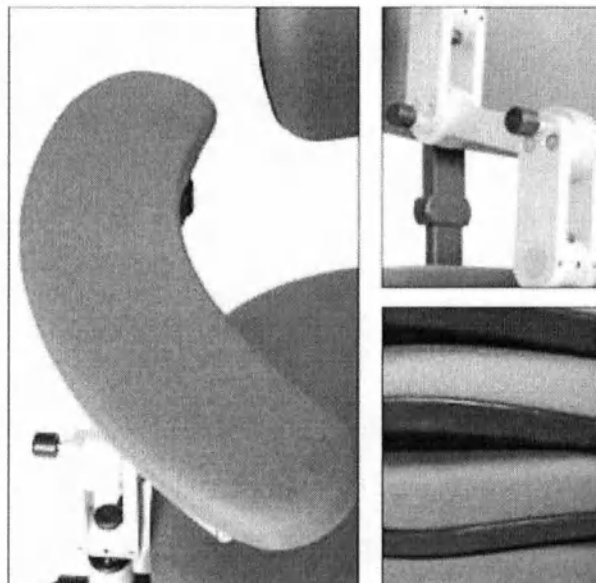

«Rini Ergoteknik AB», Круфорнсваген, 20А
SE-192 53 г. Соллентуна, Швеция
Телефон +46 8 594 771 70 Факс +46 8 92 92 79
info@rini.se www.rini.se