

ООО « ВОЛГОМЕДИЯ»

Стол для стоматолога

СС - 04

Паспорт
СС-04.00.000 ПС

г. Волгоград

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Стол для стоматолога СС-04 предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов на рабочем месте врача-стоматолога.

1.2. Нормальные условия эксплуатации стола: температура от +10°C до +35°C и относительная влажность до 80% при температуре +25°C.

1.3. Дезинфекцию наружных поверхностей стола производить согласно МУ-287-113.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Рабочая площадь стола - 2400±100 см².

2.2. Габаритные размеры: длина - (703±20) мм, ширина - (418±20) мм, высота - (811±20) мм.

2.3. Масса - не более 18 кг.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Комплект поставки стола должен соответствовать указанному в таблице.

№	Наименование	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.	Стол для стоматолога СС-04 в (без стекла верхнего, стекла нижнего, колес)	СС-04.00.000	1
2.	Стекло (верхнее)	СС-04.00.002	1
3.	Стекло (нижнее)	СС-04.00.003	1
4.	Колесо	«Ролик 60/120» (шпилька М10)	4
Эксплуатационная документация			
5.	Паспорт	СС-04.00.000ПС	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Стол состоит из каркаса 1, в котором размещены две стеклянные полки - верхняя полка 2 и нижняя полка 3, а также два выдвижных ящика 4. Ящики перемещаются на роликах по направляющим каркаса. Для выдвижения ящиков на их передних стенках установлены ручки 5. Ящики предохранены от выпадения при их полном выдвижении.

4.2. Для перемещения стол снабжен 4 поворотными колесами 6.

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

5.1. Распакуйте стол, проверьте его комплектность, а также сохранность после транспортировки. Поверхности, смазанные консервационной смазкой, протрите хлопчатобумажными салфетками, смоченными бензином или растворителем по ГОСТ 3134 или ГОСТ 443, затем протрите сухими салфетками до полного удаления консервационной смазки.

Внимание! При распаковывании соблюдайте осторожность, чтобы не повредить стеклянные полки, расположенные на верхней поверхности стола.

5.2. Для приведения стола в рабочее положение необходимо извлечь из ящика комплект колес и ввернуть их в ножки каркаса 1 (см. рис.) до упора. Стеклянные полки 2, 3 уложить в соответствующие ниши каркаса (широкую полку - в верхнюю, узкую - в нижнюю).

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Стол, упакованный в транспортную тару, может храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от +40°C до минус 50°C и относительной влажности не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6.2. Наружные неокрашенные металлические части стола предохранены от коррозии путем консервации. Предельный срок хранения без переконсервации - 3 года.

6.3. Дата проведения консервации изделия на заводе указана в свидетельстве о приемке.

6.4. Для транспортирования стол с уложенной в него эксплуатационной документацией упакован в ящик и закреплен в нем. При транспортировании в контейнерах допускается упаковка стола в обрешетку. Стол внутри ящика (обрешетки) защищен влагонепроницаемым материалом.

6.5. Стол в упаковке должен транспортироваться в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах).


7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации, изложенных в паспорте, предприятие гарантирует безотказную работу стола на протяжении гарантийного срока.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи товара покупателю. В случае невозможности определения момента передачи гарантийный срок устанавливается в пределах 18 месяцев с даты выпуска изделия.

Предприятие выдаёт гарантийные талоны (см. приложения 1, 2 и 3 в конце настоящего паспорта) на проведение ремонта данного изделия в течение гарантийного срока.

Адрес завода: 400120, г. Волгоград, ул. Елисеева, д.19. Телефон/факс: (8442) 25-21-09; 95-77-88;
25-21-08.

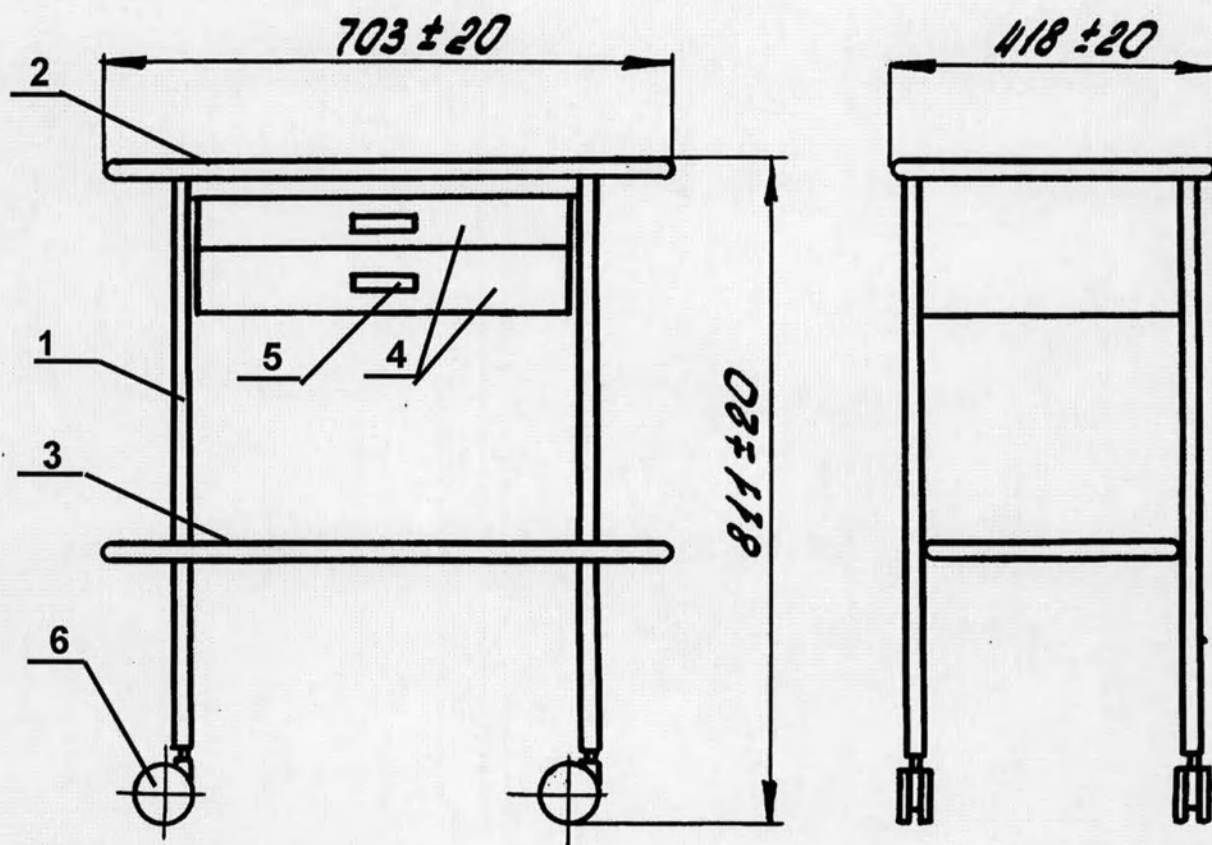

Стол для стоматолога СС-04.
1 - Каркас; 2, 3 - Стеклаянная полка; 4- Ящики; 5 - Ручка; 6 - Колесо.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае неисправности стола в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, владелец стола должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, по которому должен прибыть представитель изготовителя или предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, номер телефона;
ведомость дефектов;
гарантийный талон.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол для стоматолога СС-04.
соответствует техническим условиям ТУ 9452 – 003 – 13726632 – 2008
и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер _____

Дата выпуска и консервации _____

Личные подписи или
оттиски личных клеим лиц,
ответственных за приемку _____

ООО «Волгомедия», 400120 г. Волгоград, ул. Елисеева, д.19 Телефон/факс :. (8442) 25-21-09; 95-77-88; 25-21-08.
E-mail: volgomediya-v@yandex.ru.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники _____ СС-04 _____ ТУ 9452 – 003 – 13726632 – 2008
наименование и тип изделия, номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска _____ (заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретено _____
дата, подпись и штамп торговой организации

Введено в эксплуатацию _____

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием: _____

_____ дата, подпись _____ города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения-владельца

-----линия отреза-----

ООО « Волгомедия», 400120 г. Волгоград, ул. Елисеева, д.19 Телефон/факс :. (8442) 25-21-09; 95-77-88; 25-21-08.
E-mail: volgomediya-v@yandex.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники	СС-04	ТУ 9452 – 003 – 13726632 – 2008
наименование и тип изделия,	номер ГОСТ или ТУ	
Номер и дата выпуска	(заполняется предприятием-изготовителем)	
Приобретено		

Введено в эксплуатацию _____ дата, подпись и штамп торгующей организации _____

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием: _____ дата, подпись _____ города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения-владельца

----- линия отреза -----

ООО « Волгомедия», 400120 г. Волгоград, ул. Елисеева, д.19 Телефон/факс :. (8442) 25-21-09; 95-77-88; 25-21-08.
E-mail: volgomediya-v@yandex.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №3
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники _____ СС-04 _____ ТУ 9452 – 003 – 13726632 – 2008
наименование и тип изделия, _____ номер ГОСТ или ТУ
Номер и дата выпуска _____ (заполняется предприятием-изготовителем)
Приобретено _____

Введено в эксплуатацию _____ дата, подпись и штамп торгующей организации _____

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием: _____ дата, подпись
_____ города

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения-владельца

Перечень предприятий производящих монтаж, гарантийный ремонт, техническое обслуживание.

адрес организации	наименование организации
662616. Абакан, Комарова, 8.	Хакаское ПТП "Медтехника"
163061. Архангельск, Володарского.17 43-01-23.43-15-90.	АОГПКП "Медтехника"
414041. Астрахань, Ереванская, 4. Факс: 39-88-74	ГП "Медтехника"
656023. Барнаул. Тимуровская.72. 77-14-49.77-93-53.77-14-59.	Алтайский завод "Медтехника"
308002. Белгород, Мичурина. 39А 6-26-83.6-22-76.	АОЗТ "ВладМиВа"
308007. Белгород. Гагарина.2А 6-43-06. 6-16-79.	АООТ "Медтехника"
659316. Бийск. Алтайского края Ленинградская, 53 а/я 65 Факс: 31-16-12	ООО "Алтаймедсервис"
397140. Борисоглебск Воронежской обл. Парковая, 5, кв.18 3-10-55	ООО "Корунд"
241000. Брянск. Пролетарская.34 41-57-14. 41-24-28.	АО "Медтехника"
682860. п. Ванино Хабаровского края, Октябрьская, 20. Факс: 5-32-07	Малое предприятие "Энергомед"
600026. Владимир. Краснознаменная.3А 3-52-05	ГП "Медтехника"
400081. Волгоград, Ангарская, 17 37-65-74	ГУП "ТИСО"
404132. Волжский ул. Оломоуцкая, 26 29-88-81	Аптека " ВитаФарм "
394068. Воронеж, Здоровья, 27А 55-74-13,56-15-26	ГП "Медтехника"
620102. Екатеринбург. Волгоградская, 187 51-20-43	ООИ "ОЗОН"
423630. Елабуга, Коммунистическая, 9 3-35-66	ООО "Медицинский технический центр"
153008. Иваново, 3-я Лежневская, 2 29-02-14	ГП "Медтехника"
664035. Иркутск. Рабочего Штаба.47. 33-25-22.	ГП ТКФ "Медтехника"
426009. Ижевск. Ленина. 100 75-23-88	ГП "Медприбор"
424037. Йошкар-Ола. (Рес. Марий-Эл) Водопроводная. 85 12-22-60.	Арендное предприятие Медтехника
420029. Казань ул. Журналистов, 2А оф. 417 76-84-42	ООО "Рокада-мед "
248003. Калуга. Больничная. 2Г	ПТО "Медтехника"
610000. Киров. обл. Московская. 27 62-41-04.67-81-55.	ПКП "Медтехника"
357703. Кисловодск. Клубная. 2 3-61-05	ТОО КП "Медприборсервис."
660060. Красноярск, Кирова.40 27-97-70	КП "Медтехника"
350015. Краснодар. Промышленная, 19А 55-25-08.55-84-80. 55-20-84	АООТ "Медтехника"
350061. Краснодар. Почтовая. 78. 31-08-45. 37-62-52.	АООТ "Авиценна"
640005. Курган, М. Ульяновой. 4 3-66-72.3-69-52.3-05-76	АООТ "Медсервис"
398024. Липецк. Папина. 17а 41-23-78.74-24-60.	ЗАО "Предприятие по ремонту мед. техники"
685000. Магадан, Нагаевская. 42. 2-99-43. 2-29-57.	ПТО "Медтехника"
220038. Минск. (Беларусь) Ботаническая. 16 36-40-84. 36-93-12	Республиканский технический Центр МЗРБ
113093. Москва, Дубининская, 98 952-74-20, 235-35-40	ГУП "Гормедтехника"
603035. Нижний Новгород, Чаадаева. 3 29-37-39.	ООО "Медтехсервис"
603011. Нижний Новгород. Жукова.18 42-75-32. 42-29-15.	ГУП "Медтехника"
603126. Нижний Новгород. Родионова, 186А 36-43-82	ТД "Медтехника"
503001. Нижний Новгород Рождественская, 47а-1 33-10	ЗАО "Медвест"
630087. Новосибирск ул. Н-Данченко, 130\1	ЗАО НТФ "Медтехника"
663316. Норильск, Октябрьская. 34 35-29-98, 35-49-76.	ПТП "Медтехника"
644099. Омск, Гагарина.24 25-57-70, 25-57-42, Факс: 31-45-96	АООТ "Медтехника"
460022. Оренбург. Минская. 2 44-19-80, 66-52-57. Факс: 66-84-09	ОПТФ "Метехника"
446430. Отрадный Самарской обл. Нефтяников, 41 5-09-42, 5-16-21	ООО "Дента"
440008. Пенза. Средняя. 9 63-58-78.63-29-51. Факс: 63-38-63	ТОО "Медтехника"
185019. Петрозаводск. (Республика Карелия) Пирогова, 3. Факс: 61-90-80	ТОО "Компания МТ Сервис"
142119. Подольск. Московская обл. Беляевская. 11 52-01-20. 52-02-94.	МУП "Подольскмедтехника"
180002. Псков. Госпитальная. 7А 46-54-22	ГПТП "Медтехника"
344010. Ростов-на-Дону. пр. Ворошиловский. 105 34-31-33.32-07-45.	Гос. хозрасчетное РП "Медтехника"
390035. Рязань. Баженова, 14Б 75-48-26.	АООТ "Рязань Медтехника"
443069. Самара. Волгина, 109, кв.25 33-23-07	ООО Фирма "Инверсия"
443112. Самара. Крайняя, Больничный городок	ТОО "Новая Эпоха"
443041. Самара. Ленинская, 158. Факс: 33-36-45	ООО "Центр медицинской техники"
443083. Самара. Запорожская, 17, офис 56 66-99-41	АОЗТ "Авиамет"
443010. Самара. Галактионовская. 49 32-21-65	АООТ "Медтехника"
443095. Самара ул. Ташкентская, 159	ЗАО "Медтехника-М"
198147. Санкт-Петербург. Рузовская. 18 316-43-65	ГПТП "Медтехника"
430031. Саранск, Мордовия. Еряшев Николай Семенович 55-40-02	Частный предприниматель
410062. Саратов. Московское шоссе.7А 13-61-03.	ТОО "Факт"
410019. Саратов. Астраханский пер. 55А 64-33-12.64-43-55.64-43-54.	ТОО Завод "Медтехника"
410054. Саратов. 2-ой Детский проезд, 43	ЧП "Рытько"
164502. Северодвинск, (Архангельской обл.) Кирилкина. 4 3-37-34.	ООО "Медналадка"
164505. Северодвинск, (Архангельская обл.) а/я 525 (81842) 4-29-61	Фирма " МТТ "
142200. Серпухов, Московской обл. Луначарского, 32	ЗАО "Тайфун Мед"
214013. Смоленск, Тульский пер. 3 3-90-72. 6-02-50.	ГП "Медтехника"
355037. Ставрополь. Серова. 8 32-73-00. 34-44-26.	ГП "Медтехника"
142800. Ступино Московской обл. Андропова, 60	МУЗ Ступинская стоматологическая поликлиника
392000. Тамбов. Московская. 19А 22-73-61. 21-24-71.47-17-86.	АО "Медтехника"
170008. Тверь. 15 лет Октября. 12 36-63-73.36-74-38.366-04-66.	АООТ "Медтехника"
445020. Тольятти ул. Ушакова, 48	ООО " ТехМедСлужба "
634050. Томск.-50. пер. Безымянный, 3 77-39-03	ТОО "Медсервис"
200031. Тула,Приульская.1 43-87-23.43-83-42.	АПТО "Медтехника"
625032. Тюмень. Невская. 33 32-94-93, 24-87-14.	ГПТП "Медтехника"
670047. Улан-Удэ. (Рес. Бурятия) Пирогова. 13 А. 3-65-56, 3-65-55.	ПТП "Медтехника"
450001. Уфа, (Башкортостан) Бабушкина. 52 24-10-55.	ООТ "Медтехсервис"
450096. Уфа. Рязанская, 5 32-93-74.32-98-33	ГБПТП "Медтехника"
680028. Хабаровск. Истомина, 98 34-06-88	ОАО "Медтехника"
680000. Хабаровск. Ленина. 8 39-47-20,39-40-76.	ГП Торговый Дом "Медтехника"
428020. Чебоксары. Гладкова, 17А	ГП "Медтехника"
454076. Челябинск. Медгородок 4-40-15,60-89-00.	ПГП "Медтехника"
454091. Челябинск. Российская. 279 60-56-79	АОЗТ "Уралсервис"
672000. Чита. А/я 988 Ленинградская. 100 3-87-33, 3-86-14, 3-85-02.	ГП "Медтехторгсервис"
358005. Элиста ул. Хомутникова, 111А	ГУП "Медснаб"
677005. Якутск, ул. Феликса Кона. 32/2. 9-81-40	ГПТП "Медтехника"
150014. Ярославль. Свободы. 79 21-09-66. 21-17-38. 21-75-34.	ГПКП "Медтехника"

