

DIRECTIONS

**for use of the frames for the glasses for vision correction
metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless**

1. PURPOSE

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, rimless, rimless produced by the company «Einar Group Kereskedelmi Kft.» (Einar Kft.) are used to fix lenses in a correct position in relation to the eyes.

2. MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS AND STRUCTURE

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, rimless, rimless consist of a frontal part, temples, nose pads, hinges. Hinges can be and spring.

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, rimless, rimless are characterized by 3 main geometric parameters: width (a), width nose bridge (b) and length of temples up to the curve (L).

The parameters that are used for frames produced by the company «Einar Kereskedelmi Kft.» (Einar Group Kft.) are indicated in the table below:

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless		Distance between vertical tangents and a bezel groove in the rim (a), in mm.	Minimum distance between vertical tangents and the basis of a bezel groove in the rims (b), in mm.	Length of a temple from the axis of the hinge to the beginning of the curve (L), in mm	Weight of the frame without lenses, in grams
Metal frames for the glasses for vision correction	men	53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ±
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ±
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ±
		55 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ±
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ±
		56 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ±
		56 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ±
		56 ± 0,2	20 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ±
		58 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ±
		58 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ±
		60 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ±

Plastic frames for the glasses for vision correction	women	47 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		48 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		50 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	unisex	50 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		51 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		57 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	children's	37 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		38 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		39 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		41 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		42 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		43 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		44 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		45 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
	men	53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	20 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		60 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	women	47 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		48 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		50 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0

Combined frames for the glasses for vision correction		54 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	unisex	50 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		51 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		57 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	children's	37 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		38 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		39 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		41 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		42 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		43 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		44 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		45 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
	men	53 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	20 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		60 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	women	47 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		48 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		50 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0

		$55 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$16,0 \pm 1,0$
		$56 \pm 0,2$	$15 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$16,0 \pm 1,0$
	unisex	$50 \pm 0,2$	$14 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$12,0 \pm 1,0$
		$51 \pm 0,2$	$15 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$13,0 \pm 1,0$
		$52 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$13,0 \pm 1,0$
		$53 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$14,0 \pm 1,0$
		$54 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$14,0 \pm 1,0$
		$54 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$14,0 \pm 1,0$
		$55 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$15,0 \pm 1,0$
		$55 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$15,0 \pm 1,0$
		$56 \pm 0,2$	$15 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$16,0 \pm 1,0$
		$57 \pm 0,2$	$15 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$16,0 \pm 1,0$
	children's	$37 \pm 0,2$	$12 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$6,0 \pm 1,0$
		$38 \pm 0,2$	$14 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$6,0 \pm 1,0$
		$39 \pm 0,2$	$14 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$7,0 \pm 1,0$
		$40 \pm 0,2$	$15 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$7,0 \pm 1,0$
		$40 \pm 0,2$	$17 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$7,0 \pm 1,0$
		$41 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$8,0 \pm 1,0$
		$42 \pm 0,2$	$17 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$8,0 \pm 1,0$
		$43 \pm 0,2$	$17 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$8,0 \pm 1,0$
		$44 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$9,0 \pm 1,0$
		$45 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$9,0 \pm 1,0$
Semi-rimless frames for the glasses for vision correction	men	$53 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$14,0 \pm 1,0$
		$53 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$14,0 \pm 1,0$
		$54 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$14,0 \pm 1,0$
		$55 \pm 0,2$	$17 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$14,0 \pm 1,0$
		$55 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$15,0 \pm 1,0$
		$56 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$15,0 \pm 1,0$
		$56 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$15,0 \pm 1,0$
		$56 \pm 0,2$	$20 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$15,0 \pm 1,0$
		$58 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$16,0 \pm 1,0$
		$58 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$16,0 \pm 1,0$
		$60 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$16,0 \pm 1,0$
	women	$47 \pm 0,2$	$12 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$12,0 \pm 1,0$
		$48 \pm 0,2$	$14 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$12,0 \pm 1,0$
		$50 \pm 0,2$	$14 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$13,0 \pm 1,0$
		$52 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$13,0 \pm 1,0$
		$53 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$14,0 \pm 1,0$
		$53 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$14,0 \pm 1,0$
		$54 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$15,0 \pm 1,0$
		$54 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$15,0 \pm 1,0$
		$55 \pm 0,2$	$16 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$16,0 \pm 1,0$
		$55 \pm 0,2$	$18 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$16,0 \pm 1,0$
		$56 \pm 0,2$	$15 \pm 0,2$	$110 \pm 1,0$	$16,0 \pm 1,0$
	unisex	$50 \pm 0,2$	$14 \pm 0,2$	$90 \pm 1,0$	$12,0 \pm 1,0$

Rimless frames for the glasses for vision correction		51 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		57 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	children's	37 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		38 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		39 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		41 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		42 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		43 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		44 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		45 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
	men	n/a	n/a	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	women	n/a	n/a	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	unisex	n/a	n/a	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0

		n/a	n/a	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	children's	n/a	n/a	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0

The surface of frames should not contain any sharp edges and burrs, megascopic blisters, scratches, bubbles, solder beadings. Temples should turn around the axis smoothly, without jamming.

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless are in compliance with the norms: ISO EN 12870.

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless are chosen taking into account anthropometric information of a patient.

3. CONTRACINDICATIONS FOR USE can be:

- individual intolerance to sight correction when wearing glasses;
- impossibility to correct sight when wearing glasses.





4. MATERIALS USED

Plastic frames are produced of cellulose acetate Parade 209389.






Metal, combined and rimless frames are made of copper-nickel alloy (Monel KA 500), their temple tips are made of cellulose acetate Parade 209389, their nose pads are made of silicon LSR50 shore.

Semi-rimless frames are made of copper-nickel alloy (Monel KA 500), their temple tips are made of cellulose acetate Parade 209389, their nose pads are made of silicon LSR50 shore, fixing nylon thread is made of nylon polymer Nilor.

The materials correspond to biological security requirements.

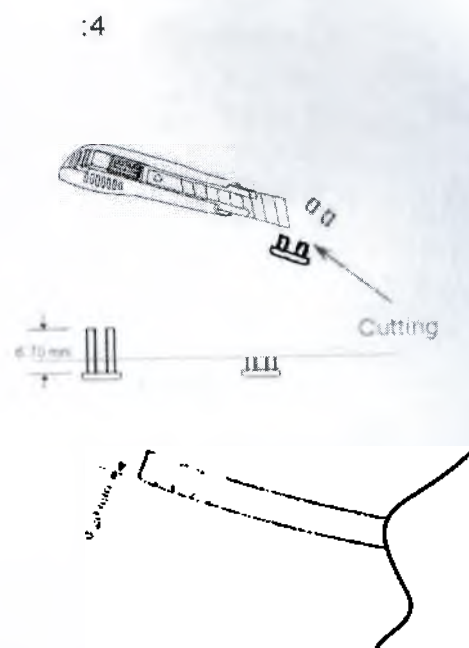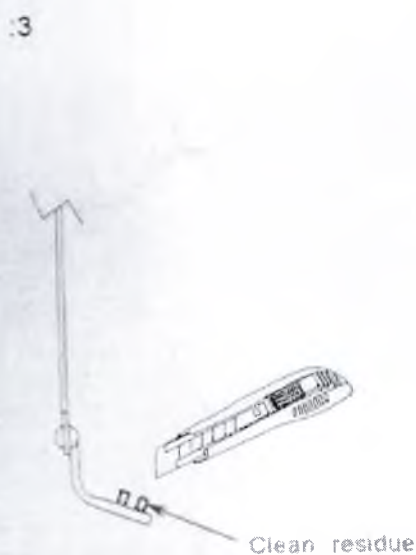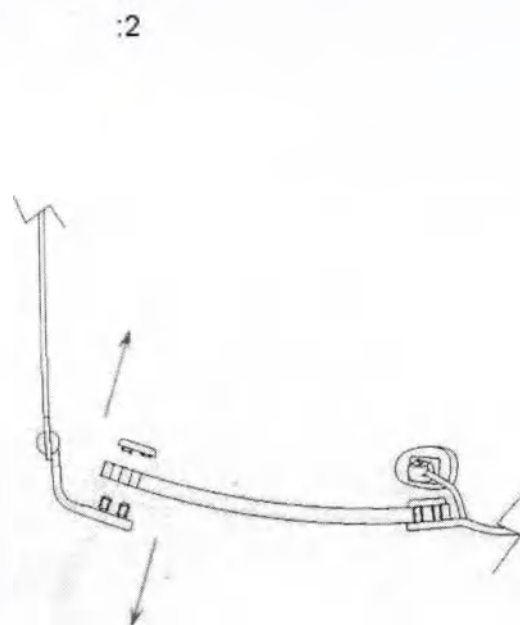
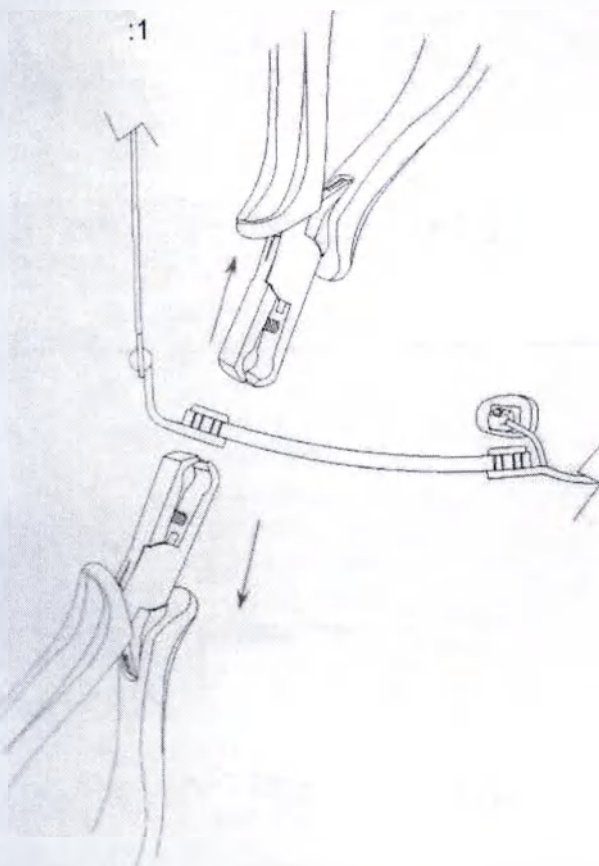


ASSEMBLY OF A PIN JOINT OF A RIMLESS FRAME

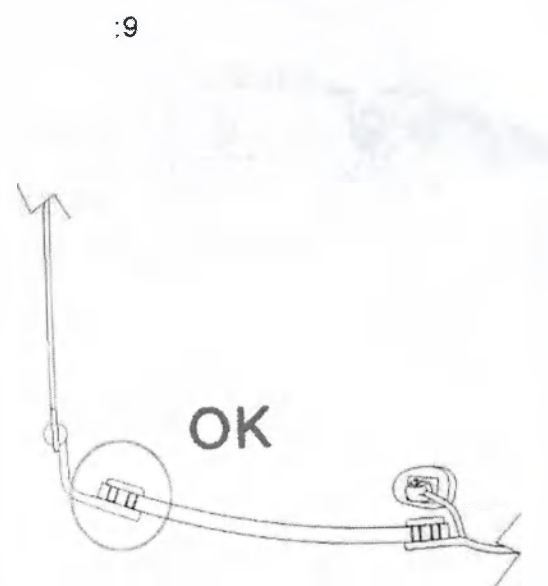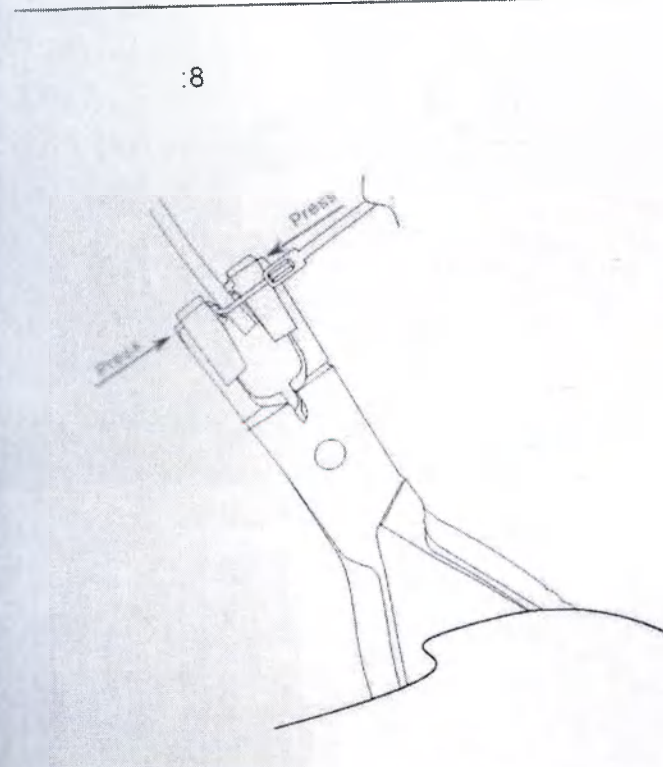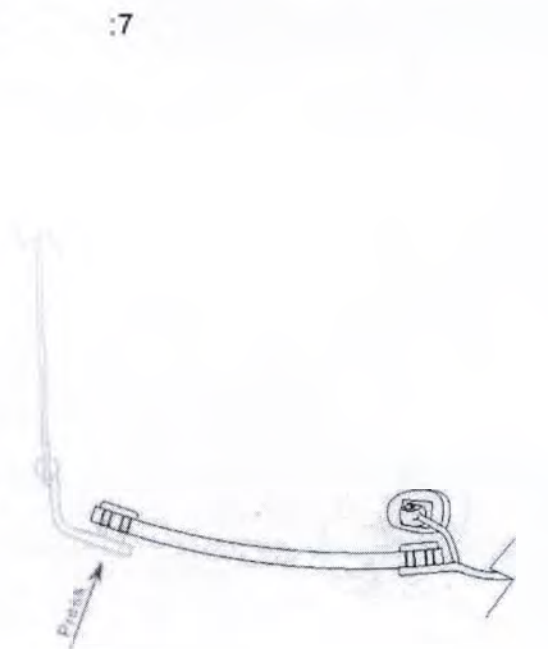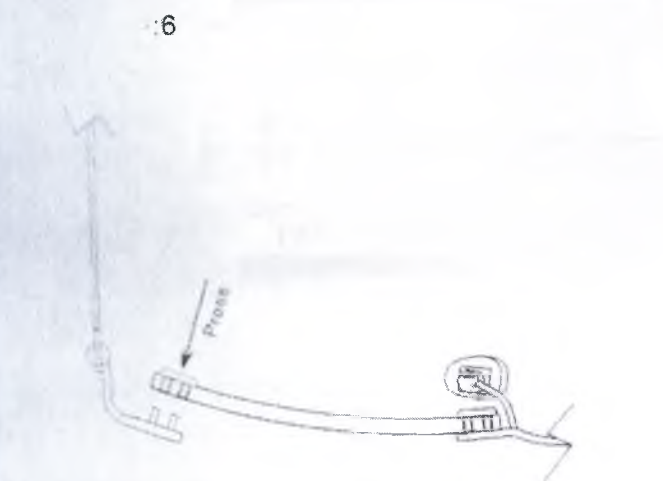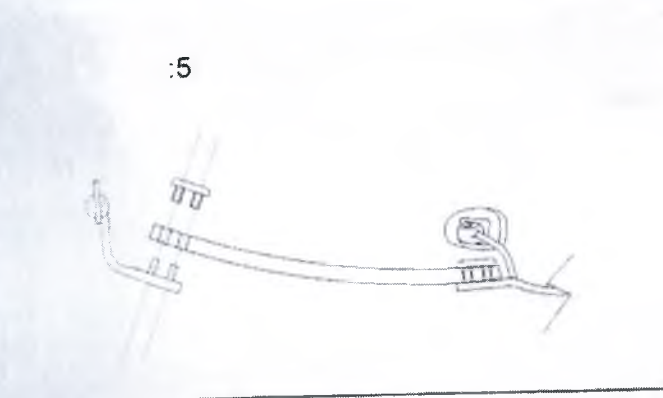

ASSEMBLAGE OF A PIN JOINT OF A RIMLESS FRAME


HINGE DRAWING

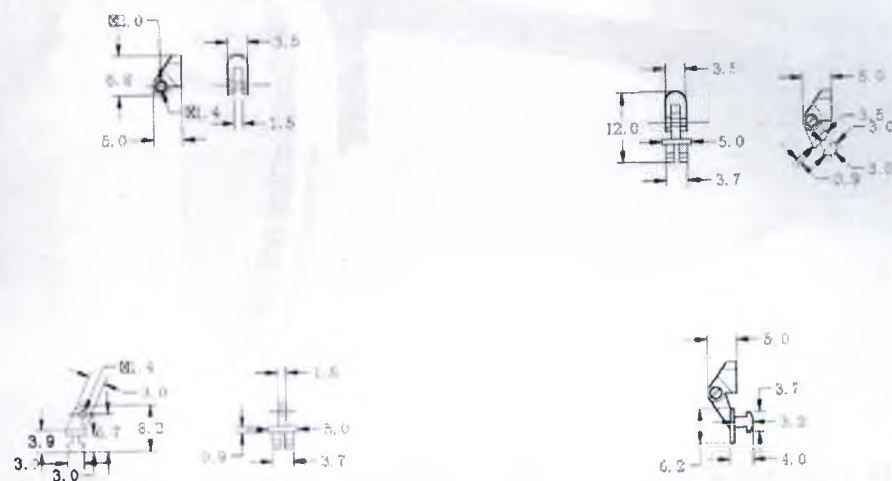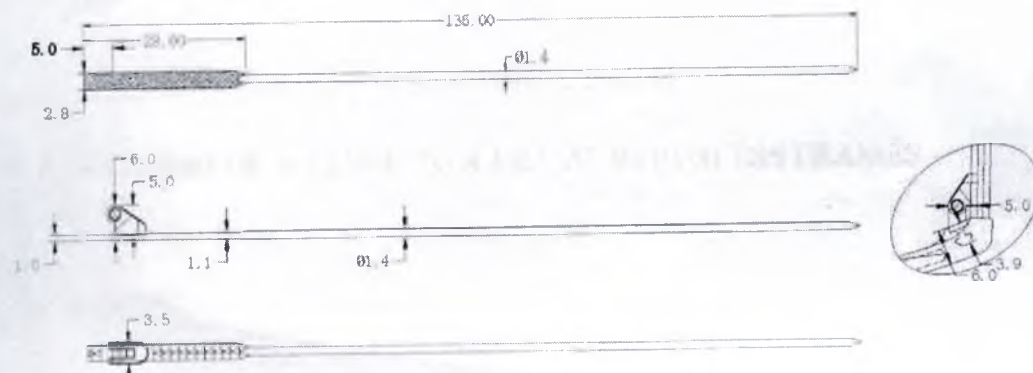

DETAILS OF A HINGE JOINT



SCHEME OF FASTENING OF A LENSE TO A FRAME IN RIMLESS FRAMES

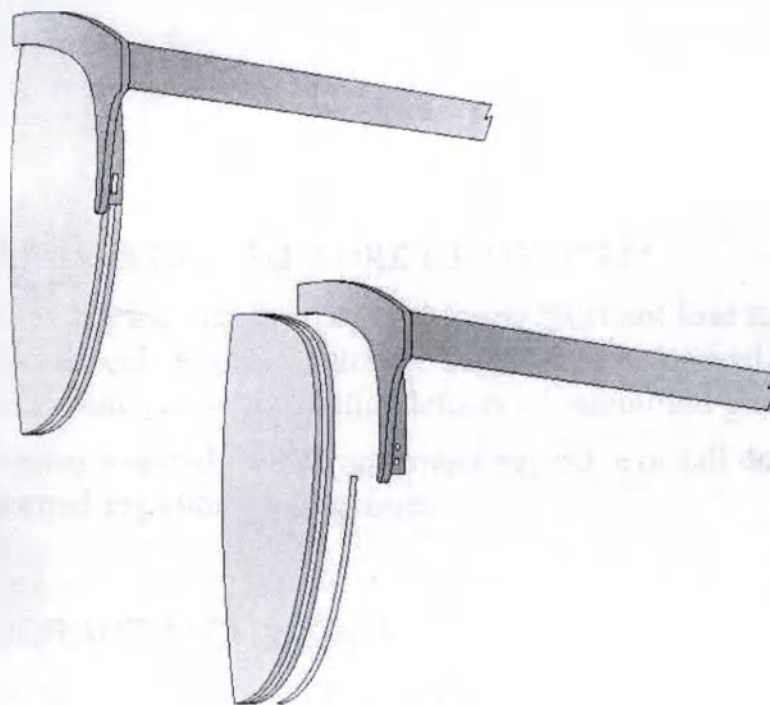


FASTENING OF A LENSE TO A FRAME WITH HELP OF A NYLON WIRE IN A SEMI-RIMLESS FRAME

5. MARKING

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless produced by the company «Einar Group Kereskedelmi Kft.» (Einar Group Kft.) have marking on temples. There are the name of the collection and CE mark on the right temple. There are technical parameters on the left temple: horizontal width of a lens to be fixed in (a), width of the nose bridge (b) and full length of temples; code of a model; a letter for colour code.

Sizes of the frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless

To check the size of the frame for the glasses for vision correction three numbers are printed inside right temple (sometimes in the nose bridge) which mean (all in millimeters):

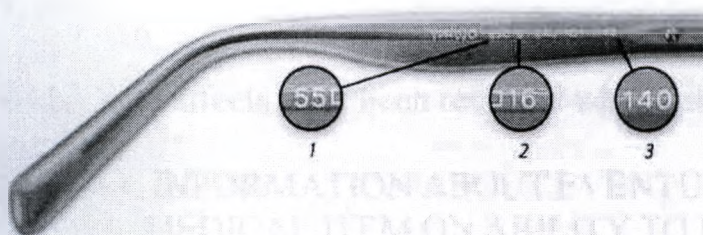

- 1 – size for light opening;
- 2 – width of a nose bridge;
- 3 – temple length.

6. PREPARATION TO WORK OF THE ITEM

Lens being inserted into it, an optical frame must not lose its initial shape. The rims have to be symmetrical. Splits, scratches, gaps between optical lenses and rims of the frontal part of the frame, as well as other defects of assembled glasses are not acceptable.

Optical lenses inserted into a frame must not move or fall down from the rims of the frame during normal exploitation of glasses.

7. STORAGE AND USAGE RULES:

- it is not allowed to make significant mechanical efforts to a frame;
- the frame is to be kept in its case or in another package that excludes possibility of mechanical damage;
- whole average service life period of a frame is not less than 3 years;
- storage conditions: in heated accommodations, at ambient temperature $+5^{\circ}\text{C}$ to -50°C , at relative humidity of 80%.
- when storing, it is not allowed to use aggressive substances (acids, alkalis) or organic solvents or their vapours.

8. USAGE CONDITIONS

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless are used in all climatic zones, at any time of day and night.

9. USAGE PRECUATIONS

Use the frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless with care when going in for sport and when doing quick movements with the **head**, leans, jumps, and strikes.

10. EVENTUAL SIDE EFFECTS WHEN USING

No side effects have been revealed when using the medical item.

11. INFORMATION ABOUT EVENTUAL INFLUENCE OF USAGE OF THE MEDICAL ITEM ON ABILITY TO DRIVE A VEHICLE AND CONTROL MECHANISMS

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, **rimless** ensure possibility to drive a vehicle and to control mechanisms for drivers having problems with sight (if frames are used for production of the glasses for vision correction).

12. STERILITY

Not sterile.

13. MAINTENANCE AND REPAIR

The frames for the glasses for vision correction are to be repaired in special laboratories having licenses for production, maintenance and repair.

14. WARRANTY

Shelf life of frames: for plastic and combined frames – 5 years; for metal frames – 10 years.

Whole service life period of frames is not less than 3 years in case of no more than 30000 movements of temples.

15. TRANSPORTATION

Transportation of the frames for the glasses for vision correction can be made by any means **of** transport, in covered vehicles, according to freight rules applicable for such a vehicle.

Frames for the glasses for vision correction must be transported at ambient temperature **from** -45°C to +50°C and relative air humidity up to 98%.

16. UTILIZATION

Frames **for** the glasses for vision correction are to be utilized in the same way as domestic waste.

17. CERTIFICATES

The Manufacturer has established and is maintaining system of quality regulated by internal rules. This QMS is controlled and actualized annually.

18. THE MANUFACTURER

«Einar Group Kereskedelmi Kft.» (Einar Group Kft.), registered address: Virágos sétány, 119 – H-2094 Nagykovácsi – Hungary
Tel. +36-26-555-536, fax: +36-26-555-531

19. AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER

LLC “MARCOLIN-RUS”, registered address: bldg. 1, 8, Bolshoy Chudov pereulok, Moscow 119021 - Russia
Tel. +7 (499) 245-72-00

Managing Director
TOLGYESI ARNOLD
«Einar Group Kereskedelmi Kft.»
(Einar Group Kft.)
Budakeszi, 2017. 04. 12.

Tim
EINAR GROUP KFT.
2094 Nagykovácsi,
Virágos sétány 119.
Adatszám: 13-09-101559
Cégjegyzékszám: 13-09-101559
IR GROUP KFT.
94 Nagykovácsi,
Virágos sétány 119.
Adatszám: 13-07-1-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-101559



Dr. Huszár Éva
közjegyző
2092 Budakeszi, Fő u. 186.
☎(23)-451-381

Ügyszám: 14031/H/222/2017.

dr. Boros Andrea, mint dr. Huszár Éva Budakeszi 1. számú székhelyre kinevezett közjegyző mellett működő közjegyzőhelyettes alulírott helyen és napon tanúsítom, hogy e közjegyzői záradékhoz fűzött **idegen nyelvű iratot**-----

Tölgyesi Arnold (születési helye, ideje: Vác, 1975. október 09., anyja neve: Arnold Mária, 2094 Nagykovácsi, Mecsek utca 14. szám alatti lakos, magyar állampolgár, mint az **EINAR GROUP Kereskedelmi Kft.** (rövidített elnevezése: EINAR GROUP Kft., székhelye: 2094 Nagykovácsi, Virágos sétány 119.) **ügyvezetője**, aki személyazonosságát a 752144PA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét a 449267LE számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával, cégképviselési jogosultságát a Cg. 13-09-101559 számú cégkivonattal igazolta. -----

előttem sajátkezűleg írta alá, annak egyidejű kijelentése mellett, hogy az okirat idegen nyelvét is érti.-----

A közjegyzőhelyettes a névaláírás hitelesítésekor az okirat tartalmát (jogszerűségét) nem vizsgálta.-----

Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. -----

Kelt Budakeszin, 2017. (kettőezer-tizenhetedik) év április hónap 12. (tizenkettedik) napján. ---



dr. Boros Andrea
közjegyzőhelyettes



УКАЗАНИЯ

по применению оправ корректирующих очков - металлических, пластмассовых, комбинированных, полуободковых, безободковых

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оправы корректирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые, изготовленные компанией «ЭЙНАР ГРУП Керешкедельми Кфт.» («Einar Group Kereskedelmi Kft.») («Эйнар Груп Кфт.» (Einar Group Kft.) используются для фиксации линз в правильном положении относительно глаз.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯ

Оправы корректирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые состоят из фронтальной части, заушников, носовых фиксирующих накладок, шарнирных креплений. Шарнирные крепления могут быть одиночными и пружинными.

Оправы корректирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые характеризуются 3 основными геометрическими параметрами: ширина (a), ширина мостика (b) и длина заушников до изгиба (L).

Параметры, которые используются для оправ, разработанные компанией «ЭЙНАР ГРУП Керешкедельми Кфт.» («Einar Group Kereskedelmi Kft.») («Эйнар Груп Кфт.» (Einar Group Kft.) указаны в таблице ниже:

Оправы корректирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые		Расстояние между вертикальными касательными к фацетной канавки ободка (a), в мм.	Минимальное расстояние между вертикальными касательными к основанию фацетной канавки ободков (b), в мм.	Длина заушника от оси шарнирных креплений до начала изгиба (L) в м.	Масса оправы без линз, в граммах
Оправы корректирующих очков металлические	мужские	53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	20 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		60 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	женские	47 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		48 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		50 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0

		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	унисекс	50 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		51 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		57 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	детские	37 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		38 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		39 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		41 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		42 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		43 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		44 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		45 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
Оправы корректирующих очков пластмассовые	мужские	53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	20 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		60 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	женские	47 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		48 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		50 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	унисекс	50 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		51 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0

		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		57 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	детские	37 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		38 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		39 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		41 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		42 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		43 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		44 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		45 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
Оправы корректирующих очков комбинированные	мужские	53 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	20 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		60 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	женские	47 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		48 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		50 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	унисекс	50 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		51 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		57 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	детские	37 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		38 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		39 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0

		40 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		41 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		42 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		43 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		44 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		45 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
Оправы корректирующих очков полубоковые	мужские	53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	20 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		60 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	женские	47 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		48 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		50 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	унисекс	50 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		51 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		57 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	детские	37 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		38 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		39 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		41 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		42 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		43 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		44 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		45 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
Оправы корректирующих очков безободковые	мужские	Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0

		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	женские	Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	унисекс	Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	детские	Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0

На поверхности оправы не должно быть никаких острых краев и заусенцев, мегаскопических выступов, царапин, пузырьков, следов от спайки. Заушники должны плавно вращаться вокруг оси, без заедания.

Оправы корригирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полубодковые и безободковые соответствуют нормам: ISO EN 12870.

Оправы корригирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полубодковые, безободковые выбираются с учетом антропометрической информации пациента.

3. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- индивидуальная непереносимость коррекции зрения при ношении очков;
- невозможность коррекции зрения при ношении очков.

4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Оправы пластмассовые производятся из ацетата целлюлозы Parade 209389.

Оправы металлические, комбинированные и безободковые изготовлены из медно-никелевого сплава (Monel KA 500), наконечники заушников изготовлены из ацетата целлюлозы

Parade 209389, носовые упоры изготовлены из силикона LSR50.

Оправы полуободковые сделаны из медно-никелевого сплава (Monel KA 500), наконечники заушников изготовлены из ацетата целлюлозы Parade 209389, носовые упоры сделаны из силикона LSR50, фиксирующая нейлоновая леска сделана из нейлонового полимера Nilor.

Материалы соответствуют требованиям биологической безопасности.

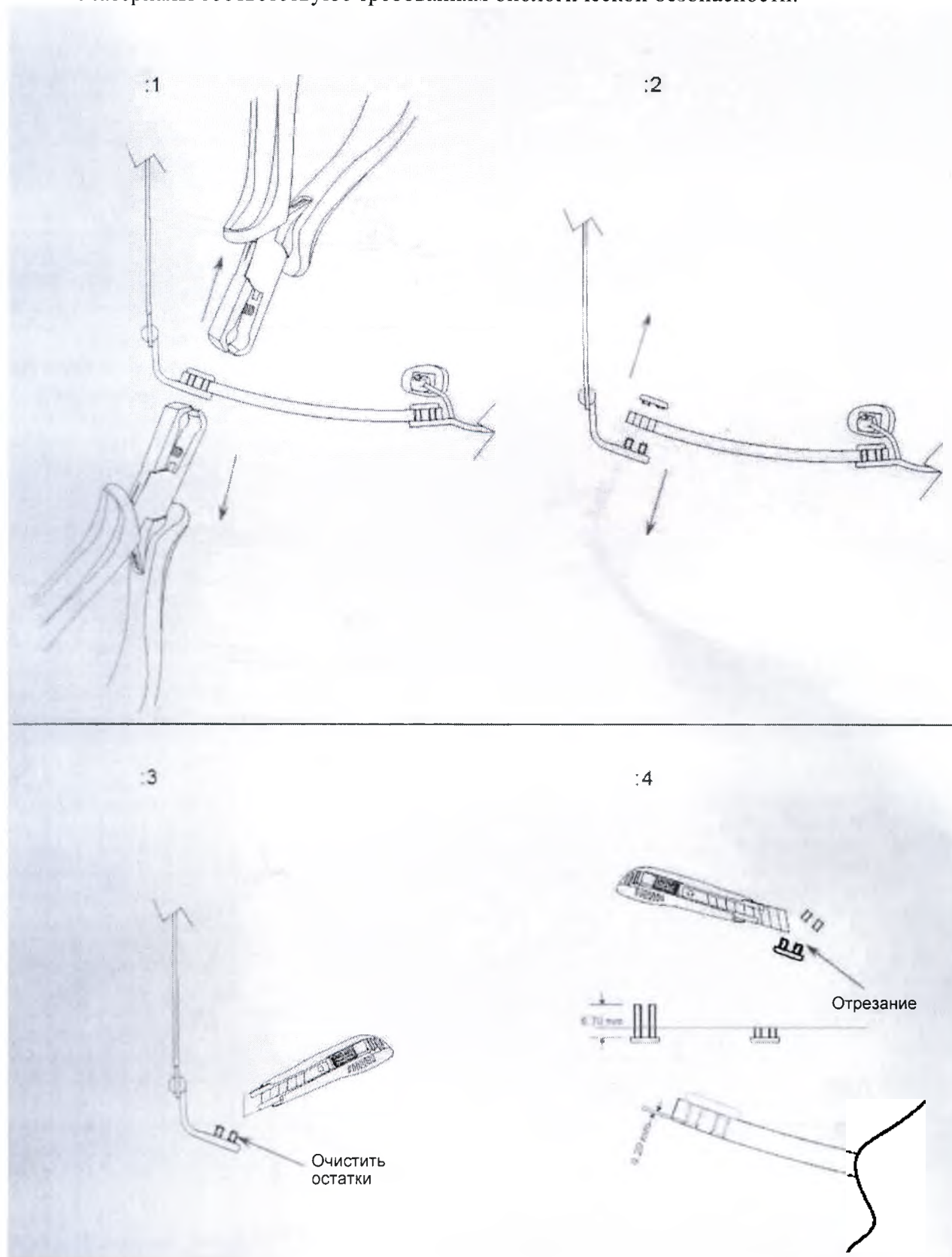


СБОРКА ШАРНИРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ОПРАВЫ БЕЗОБОДКОВОЙ


:5




:7

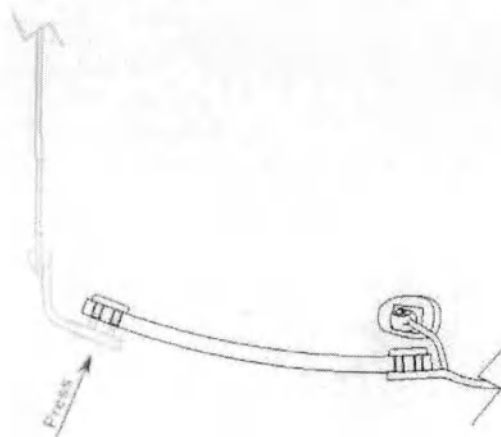


:6

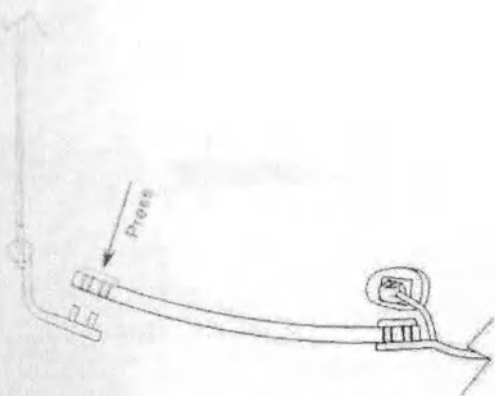

:9




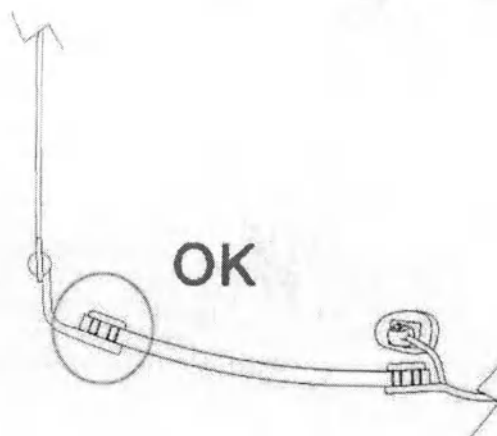


:8

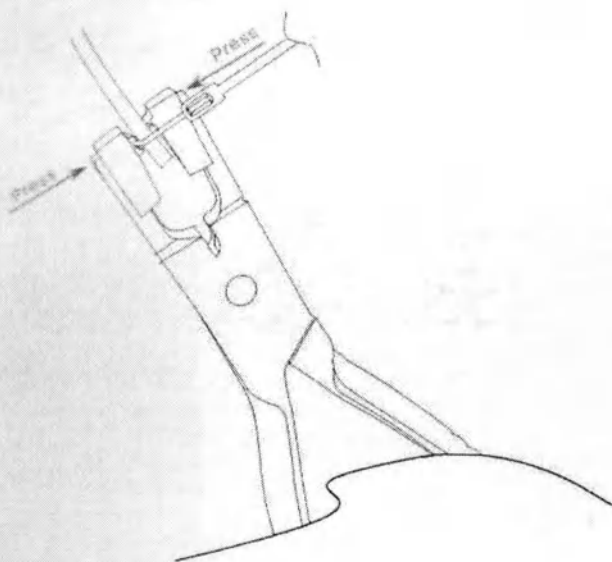

СБОРКА ШАРНИРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ОПРАВЫ БЕЗОБОДКОВОЙ


ЧЕРТЕЖ ШАРНИРА

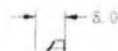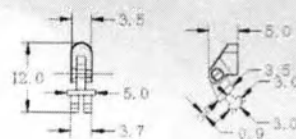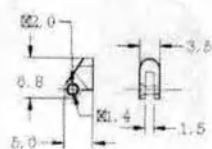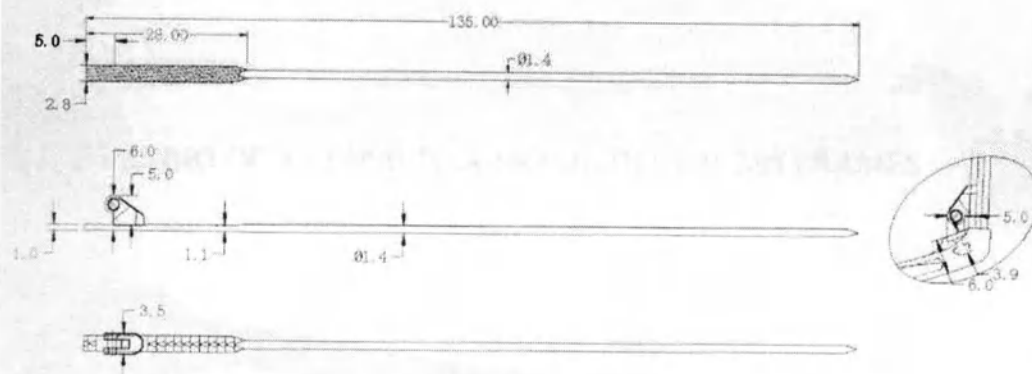

ДЕТАЛИ ШАРНИРНОГО СОЕДИНЕНИЯ



СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ЛИНЗЫ К ОПРАВЕ ДЛЯ ОПРАВ БЕЗОБОДКОВЫХ

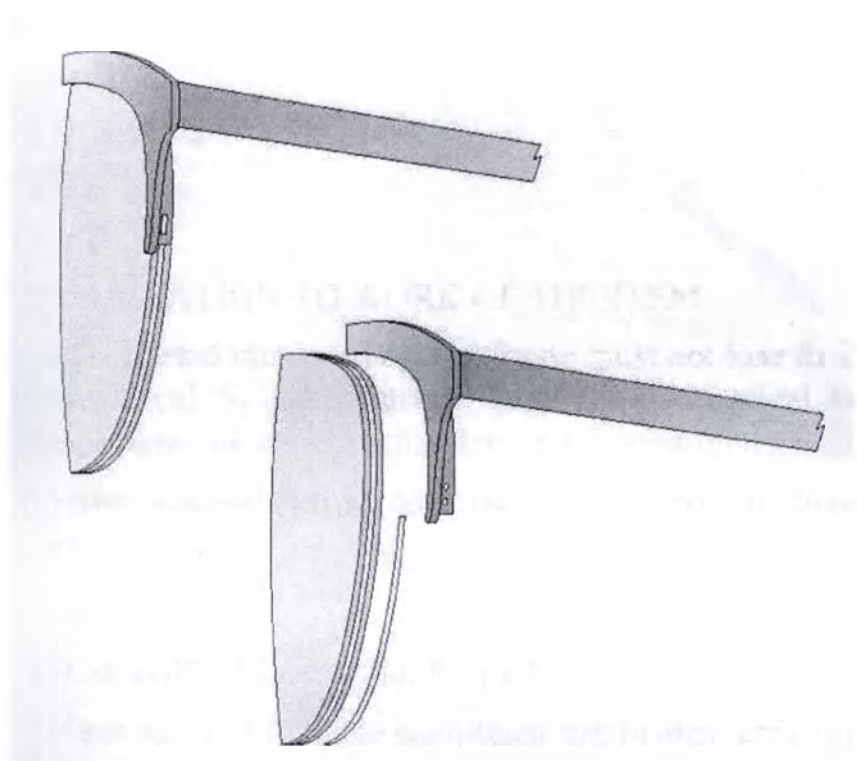


КРЕПЛЕНИЕ ЛИНЗЫ К ОПРАВЕ ПРИ ПОМОЩИ НЕЙЛОНОВОЙ ЛЕСКИ В ОПРАВЕ ПОЛУОБОДКОВОЙ

5. МАРКИРОВКА

Оправы корректирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые, изготовленные компанией «ЭЙНАР ГРУП Керешкедельми Кфт.» («Einar Group Kereskedelmi Kft.») («Эйна́р Групп Кфт.» (Einar Group Kft.) маркируются на заушниках. Маркировка включает название коллекции и маркировку CE на правом заушнике. Технические параметры указываются на левом заушнике: горизонтальная ширина фиксируемой линзы (a), ширина мостика (b) и полная длина заушников; код модели; буква цветового кода.

Размеры оправ корректирующих очков - металлических, пластмассовых, комбинированных, полуободковых, безободковых

Для проверки размера оправы корректирующих очков три цифры напечатаны внутри правого заушника (иногда на мостике), которые означают (в миллиметрах):

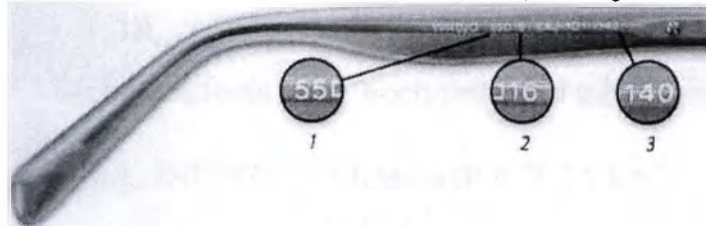

- 1 - размер для светопроема;
- 2 - ширина мостика;
- 3 - длина заушника.

6. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Оптическая оправа не должна терять первоначальной формы при установке в неё линз. Ободки должны быть симметричными. Трещины, царапины, зазоры между оптическими линзами и ободками головной части оправы, а также иные дефекты собранных очков недопустимы.

Оптические линзы, вставленные в оправу, не должны двигаться или выпадать из проемов оправы в ходе обычной эксплуатации очков.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- не разрешается прилагать значительные механические усилия в отношении оправы;
- оправа должна храниться в футляре или в другой упаковке, исключающей вероятность механического повреждения;
- общий средний срок службы оправы составляет не менее 3 лет;
- условия хранения: в отапливаемых помещениях, при температуре окружающей среды от + 5 °С до + 50 °С. при относительной влажности 80%.
- при хранении не допускается воздействие агрессивных веществ (кислот, щелочей) или органических растворителей или их паров.

8. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Оправы корректирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые используются во всех климатических зонах, в любое время дня и ночи.

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Осторожно используйте оправы корригирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полубодковые, безободковые, когда занимаетесь спортом и делаете быстрые движения головой, прыжки, наклоны и удары.

10. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

При использовании медицинского изделия не было выявлено побочных эффектов.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МЕХАНИЗМАМИ

Оправы корригирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полубодковые, безободковые обеспечивают возможность управлять транспортными средствами и механизмами для водителей, имеющих проблемы со зрением (если оправы используются для производства очков для коррекции зрения).

12. СТЕРИЛЬНОСТЬ

Не стерильный.

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Оправы корригирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полубодковые, безободковые должны ремонтироваться в специальных лабораториях, обладающих лицензиями на производство, техническое обслуживание и ремонт.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок годности оправ: для пластмассовых и комбинированных оправ - 5 лет; для металлических оправ - 10 лет.

Полный срок службы оправ составляет не менее 3 лет при количестве движений заушников не более 50000.

15. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка оправ корригирующих очков - металлических, пластмассовых, комбинированных, полубодковых, безободковых может осуществляться любыми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, согласно правилам грузоперевозок, применимым для такого транспортного средства.

Оправы корригирующих очков должны транспортироваться при температуре окружающей среды от -45°C до +50°C и относительной влажности до 98%.

16. УТИЛИЗАЦИЯ

Оправы корригирующих очков должны утилизироваться также, как и бытовые отходы.

17. СЕРТИФИКАТЫ

Производитель установил и использует систему качества, регулируемую внутренними правилами. Данная система качества контролируется и актуализируется ежегодно.

18. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«ЭЙНАР ГРУП Керешкедельми Кфт.» («Einar Group Kereskedelmi Kft.») («Эйнар Групп Кфт.» (Einar Group Kft.) , юридический адрес: 2094 Надьковачи, бульвар Вилагош, 119, Венгрия

Тел. +36-26-555-536, факс: +36-26-555-531

19. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО "МАРКОЛИН-РУС", юридический адрес: д.1, 8, Большой Чудов переулок, Москва, 119021 - Россия

Тел. +7 (499) 245-72-00

Управляющий директор

Тёлгеши Арнольд

Коммерческое предприятие с ограниченной
ответственностью «ЭЙНАР ГРУП»

(Эйнар Групп Кфт.)

г. Будапешт, 12 апреля 2017г.

<подпись>

[Штамп: «ЭЙНАР ГРУП КФТ.»

2094. Надьковачи

бульвар Вилагош, 119.

Налоговый номер: 13407311-2-13

Регистрационный номер: 13-09-101559]



Д-р Эва ХУСАР
нотариус
2092 г.Будапешт, Фё у. 186.
тел. (23)-451-381

Номер дела: 14031/Н/222/2017.

я, д-р Андреа БОРОШ, выступая в качестве заместителя нотариуса д-ра Эвы ХУСАР, назначенной в 1-й головной офис г. Будапешт, в нижеуказанном месте и день свидетельствую, что

Арнольд ТЁЛЬДЕШИ (место и дата рождения: Вац, 9 октября 1975 года, имя матери Маг АРНОЛЬД, проживающий 2094 Надьковачи, Мечек утца 14, гражданин Венгрии, выступающий в качестве **управляющего** компании «ЭЙНАР ГРУП Керешкедельми Кфт.» (EINAR GROUP Kereskedelmi Kft.) (краткое название: «ЭЙНАР ГРУП Кфт» «EINAR GROUP Kft.», ад. головного офиса 2094 Надьковачи, бульвар Вилагош, 119), который подтвердил свою личность на основании удостоверения личности № 752144РА, официального удостоверения регистрации компании с указанием адреса № 449267LE, законные полномочия на представление компании № 13-09-101559 согласно реестру компаний, в моём присутствии **собственноручно** подписал документ на иностранном языке, приложенный к данному нотариальному свидетельствованию, заявив одновременно, что язык документа владеет.

При засвидетельствовании подписи заместитель нотариуса не проверил содержание документа (его законность).

Сторона приняла к сведению информацию заместителя нотариуса о положениях абзацев (2)-(3) § 122 Закона о нотариусах, а также распоряжений, касающихся онлайн-защиты персональных данных.

Выдано в г.Будапешт, 12 (двенадцатого) апреля 2017 (две тысячи семнадцатого) года.,

<подпись>

д-р Андреа БОРОШ
заместитель нотариуса

[Печать: Д-р Эва ХУСАР | НОТАРИУС | БУДАПЕШТ]

Печати на сшив

[Печать: Д-р Эва ХУСАР | НОТАРИУС | БУДАПЕШТ]

[Печать: Д-р Эва ХУСАР | НОТАРИУС | БУДАПЕШТ]

Перевод выполнил переводчик
Руленкова Олеся Александровна

Российская Федерация.

Город Москва. Двадцать первого апреля две тысячи семнадцатого года.

Я, Акимова Алла Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Руленковой Олесеи Александровны.

Подпись сделана в моем присутствии.


Личность подписавшего документ установлена.



Зарегистрировано в реестре за

№ 8-276


Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00

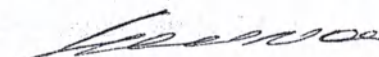 А.А. Акимова



Прошнуровано, пронумеровано и
Скреплено печатью 27 листа (-ов)

Нотариус города Москвы

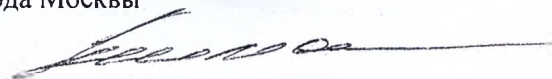

Всего прошнуровано,
пропумеровано и скреплено
печатью 29

ВРИО нотариуса

Российская Федерация.

Москва,

Двадцать пятого апреля тысячи Семнадацатого года

Я, Кочергина Юлия Олеговна, временно исполняющая обязанности нотариуса
города Москвы Акимовой Алены Александровны, свидетельствую верность копии
с представленного мне перевод устного

Зарегистрировано в реестре: № 8-358 290 руб.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): -

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: -

Ю. О. Кочергина

