

DIRECTIONS

for use of the frames for the glasses for vision correction

metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless

1. PURPOSE

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless produced by the company EINAR ITALIA S.R.L. are used to fix lenses in a correct position in relation to the eyes.

2. MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS AND STRUCTURE

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless consist of a frontal part, temples, nose pads, hinges. Hinges can be single and spring.

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless are characterized by 3 main geometric parameters: width (a), width of a nose bridge (b) and length of temples up to the curve (L).

The parameters that are used for frames produced by the company EINAR ITALIA S.R.L. are indicated in the table below:

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless		Distance between vertical tangents and a bezel groove in the rim (a), in mm.	Minimum distance between vertical tangents and the basis of a bezel groove in the rims (b), in mm.	Length of a temple from the axis of the hinge to the beginning of the curve (L), in mm	Weight of a frame without lenses, in grammes
Metal frames for the glasses for vision correction	men	53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	20 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		60 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0

Plastic frames for the glasses for vision correction	women	47 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		48 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		50 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	unisex	50 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		51 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		57 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	children's	37 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		38 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		39 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		41 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		42 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		43 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		44 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		45 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
Plastic frames for the glasses for vision correction	men	53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	20 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		60 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	women	47 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		48 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		50 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0

Combined frames for the glasses for vision correction		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	unisex	50 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		51 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		57 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	children's	37 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		38 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		39 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		41 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		42 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		43 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		44 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		45 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
	men	53 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	20 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		60 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	women	47 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		48 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		50 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0

Semi-rimless frames for the glasses for vision correction		54 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	unisex	50 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		51 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		57 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	children's	37 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		38 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		39 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		41 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		42 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		43 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		44 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		45 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
	men	53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	20 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		60 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	women	47 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		48 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		50 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0

Rimless frames for the glasses for vision correction		55 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	unisex	50 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		51 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		57 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	children's	37 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		38 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		39 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		41 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		42 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		43 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		44 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		45 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
	men	n/a	n/a	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	women	n/a	n/a	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0

	unisex	n/a	n/a	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		n/a	n/a	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	children's	n/a	n/a	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		n/a	n/a	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0

The surface of frames should not contain any sharp edges and burrs, megascopic blisters, scratches, bubbles, solder beadings. Temples should turn around the axis smoothly, without jamming.

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless are in compliance with the norms: ISO EN 12870.

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless are chosen taking into account anthropometric information of a patient.

3. CONTRACINDICATIONS FOR USE can be:

- individual intolerance to sight correction when wearing glasses;
- impossibility to correct sight when wearing glasses.

4. MATERIALS USED

Plastic frames are produced of cellulose acetate Parade 209389.


Metal, combined and rimless frames are made of copper-nickel alloy (Monel KA 500), their temple tips are made of cellulose acetate Parade 209389, their nose pads are made of silicon LSR50 shore.

Semi-rimless frames are made of copper-nickel alloy (Monel KA 500), their temple tips are made of cellulose acetate Parade 209389, their nose pads are made of silicon LSR50 shore, fixing nylon thread is made of nylon polymer Nilor.


The materials correspond to biological security requirements.




:1

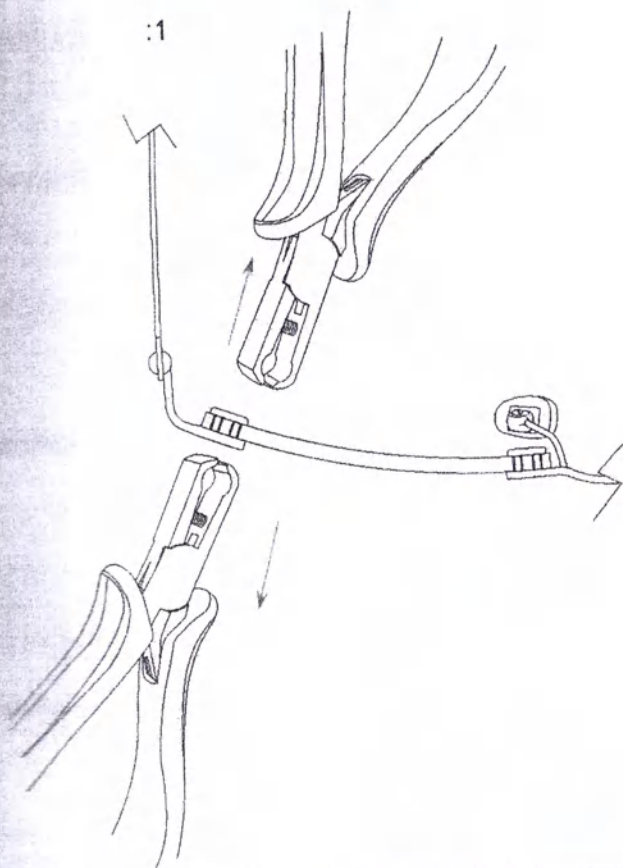


:2

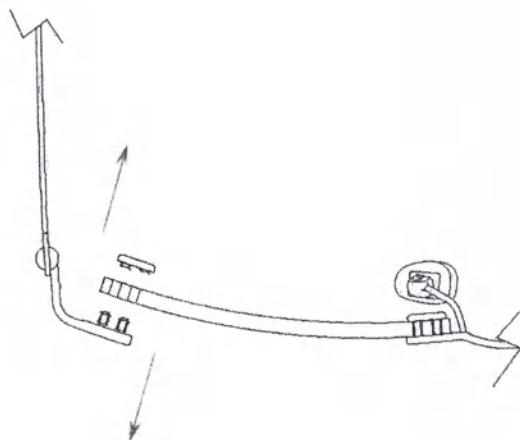

:3

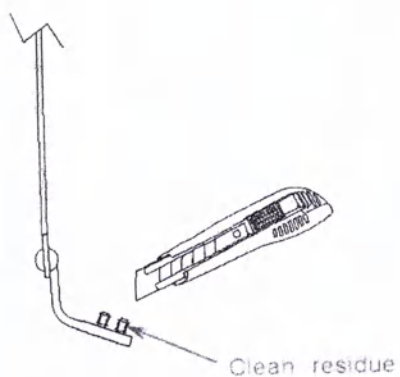

:4

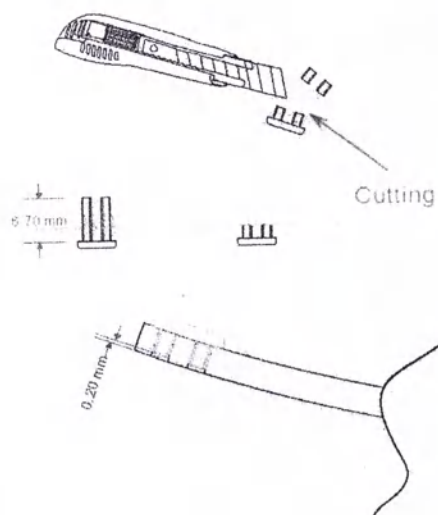

ASSEMBLAGE OF A PIN JOINT OF A RIMLESS FRAME




:5




:7




:6

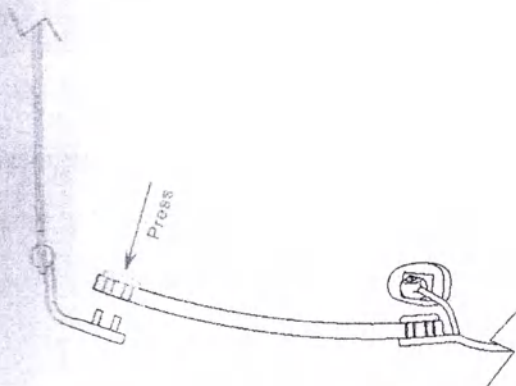

:9

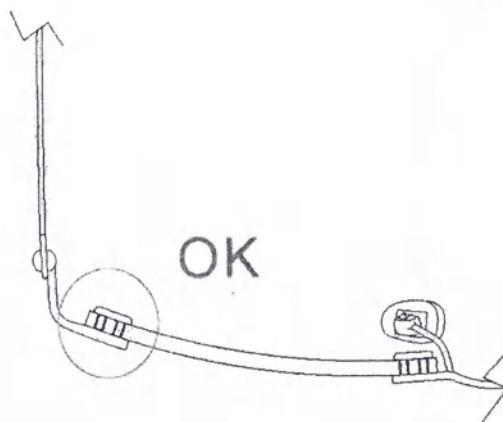





:8

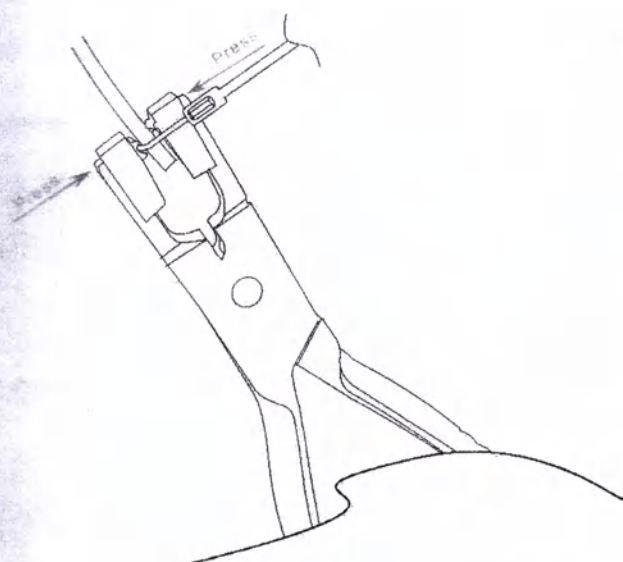

ASSEMBLY OF A PIN JOINT OF A RIMLESS FRAME



HINGE DRAWING

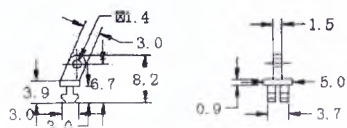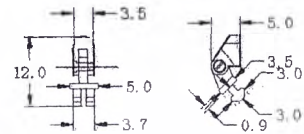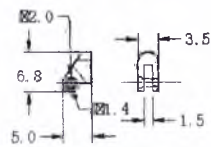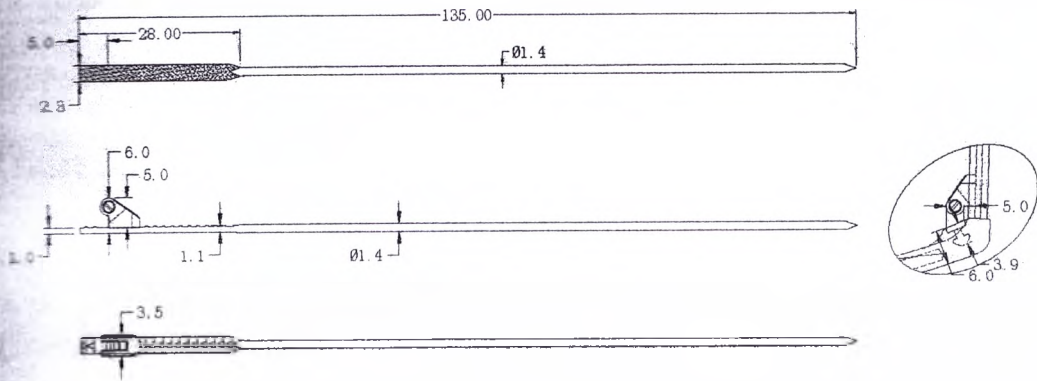

DETAILS OF A HINGE JOINT



FIGURE 1. METHODS OF FASTENING OF A LENSE TO A FRAME IN RIMLESS FRAMES

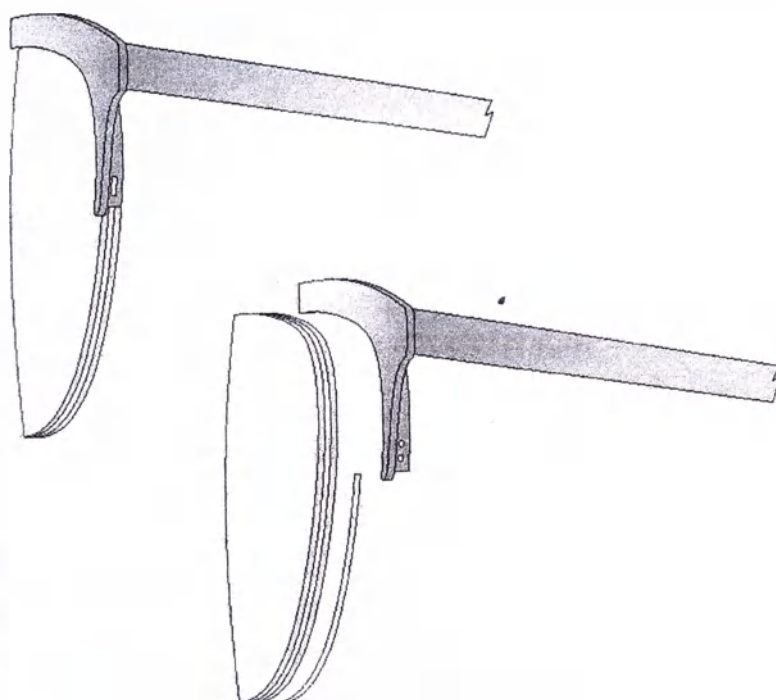


FIGURE 2. FASTENING OF A LENSE TO A FRAME WITH HELP OF A NYLON WIRE IN A SEMI-RIMLESS FRAME


5. MARKING

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless produced by the company EINAR ITALIA S.R.L. have marking on temples. There are the name of the production and CE mark on the right temple. There are technical parameters on the left temple: horizontal width of a lens to be fixed in (a), width of the nose bridge (b) and full length of temples; code of a model; a letter for colour code.



Sizes of the frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless,

To check the size of the frame for the glasses for vision correction three numbers are printed on the right temple (sometimes in the nose bridge) which mean (all in millimeters):

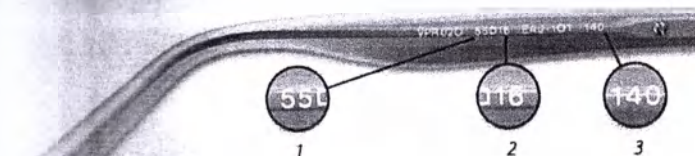

- size for light opening;
- width of a nose bridge;
- temple length.

6. PREPARATION TO WORK OF THE ITEM

When lenses being inserted into it, an optical frame must not lose its initial shape. The rims have to be symmetrical. Splits, scratches, gaps between optical lenses and rims of the frontal part of the frame, as well as other defects of assembled glasses are not acceptable.

Optical lenses inserted into a frame must not move or fall down from the rims of the frame during normal exploitation of glasses.

7. STORAGE AND USAGE RULES:

- It is not allowed to make significant mechanical efforts to a frame;
- the frame is to be kept in its case or in another package that excludes possibility of mechanical damage;
- whole average service life period of a frame is not less than 3 years;
- storage conditions: in heated accommodations, at ambient temperature $+ 5^{\circ}\text{C}$ to $+ 35^{\circ}\text{C}$ at relative humidity of 80%.
- when storing, it is not allowed to use aggressive substances (acids, alkalis) or organic solvents or their vapours.

8. USAGE CONDITIONS

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, are used in all climatic zones, at any time of day and night.



9. USAGE PRECAUTIONS

Use the frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless with care when going in for sport and when doing quick movements with the head, leans, and strikes.

10. EVENTUAL SIDE EFFECTS WHEN USING

No side effects have been revealed when using the medical item.

11. INFORMATION ABOUT EVENTUAL INFLUENCE OF USAGE OF THE MEDICAL ITEM ON ABILITY TO DRIVE A VEHICLE AND CONTROL MECHANISMS

The frames for the glasses for vision correction metal, plastic, combined, semi-rimless, rimless ensure the possibility to drive a vehicle and to control mechanisms for drivers having problems with sight (frames are used for production of the glasses for vision correction).

12. STERILITY

Not sterile.

13. MAINTENANCE AND REPAIR

The frames for the glasses for vision correction are to be repaired in special laboratories having licenses for production, maintenance and repair.

14. WARRANTY

Self life of frames: for plastic and combined frames – 5 years; for metal frames – 10 years.

Whole service life period of frames is not less than 3 years in case of no more than 30000 movements of temples.

15. TRANSPORTATION

Transportation of the frames for the glasses for vision correction can be made by any means of transport, in covered vehicles, according to freight rules applicable for such a vehicle.

Frames for the glasses for vision correction must be transported at ambient temperature from -50°C to +50°C and relative air humidity up to 98%.

16. UTILIZATION

Frames for the glasses for vision correction are to be utilized in the same way as domestic



17. CERTIFICATES

The Manufacturer has established and is maintaining system of quality regulated by internal QMS is controlled and actualized annually.

18. THE MANUFACTURER


EINAR ITALIA S.R.L., registered address: Via Val Gallina, 40 – 32010 Soverzene, Belluno – Italy
Tel. +39 0437-981713, e-mail: info@einaritalia.it

19. AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE MANUFACTURER

SC "MARCOLIN-RUS", registered address: bldg. 1, 8, Bolshoy Chudov pereulok, Moscow
Russia
Tel. +7 (499) 245-72-00

EINAR ITALIA S.R.L.

Via Val Gallina, 40
32010 Soverzene (BL)
Partita IVA 01134430253

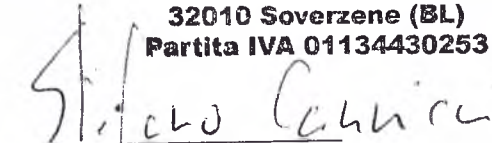
Signature and stamp

General Director

Stefano Cannicci

EINAR ITALIA S.R.L.

Soverzene, 07-Apr-2017





Camera di Commercio
TREVISO - BELLUNO

Visto per la conformità della firma di
STEFANO CAMMOC
depositata in atti presso questa
Camera di Commercio

p. il SEGRETARIO GENERALE
(il Funzionario Delegato)

DIRITTI EURO 3,00

L'Imposta di Bollo
(non data da oggi)

[Handwritten signature]

" esente bollo
art. 15 PR u. 662/
Tabella Allegato



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- 1) Paese: REPUBBLICA ITALIANA
- 2) Il Presente atto pubblico è stato redatto da LOREDANA DE TOFFO
- 3) agente in qualità di UN PIU' EATTO
- 4) è segnato dal CAMERA COMMERCIO TREVISO-BELLUNO

ATTESTATO

- 5) a Belluno 6) il 9 MAR 2017
- 7) da PREFETTURA BELLUNO
- 8) sotto il numero 1083/2017
- 9) Timbre

10) Firma
Il Funzionario Incaricato



IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(dott. Carlo Segni)

BELLUNO, 11/05/2017

УКАЗАНИЯ

по применению оправ корректирующих очков -

металлических, пластмассовых, комбинированных, полуободковых, безободковых

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оправы корректирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые, изготовленные компанией «ЭЙНАР ИТАЛИЯ С.Р.Л.» используются для фиксации линз в правильном положении относительно глаз.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯ

Оправы корректирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые состоят из фронтальной части, заушников, носовых фиксирующих элементов, шарнирных креплений. Шарнирные крепления могут быть одиночными и пружинными.

Оправы корректирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые характеризуются 3 основными геометрическими параметрами:

(а), ширина мостика (b) и длина заушников до изгиба (L).

Параметры, которые используются для оправ, разработанные компанией «ЭЙНАР ИТАЛИЯ С.Р.Л.» указаны в таблице ниже:

Оправы корректирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые		Расстояние между вертикальными касательными к канавке ободка (a), в мм.	Минимальное расстояние между вертикальными касательными к основанию фасетной канавки ободков (b), в мм.	Длина заушника от оси шарнирных креплений до начала изгиба (L) в м.	Масса оправы без линз, в граммах
Оправы корректирующих очков металлические	мужские	53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	20 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		60 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	женские	47 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		48 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		50 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0

		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	унисекс	50 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		51 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		57 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	детские	37 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		38 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		39 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		41 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		42 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		43 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		44 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		45 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
Шпильки корректирующих очков пластмассовые	мужские	53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	20 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		60 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	женские	47 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		48 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		50 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	унисекс	50 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		51 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0

		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		57 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	детские	37 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		38 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		39 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		41 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		42 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		43 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		44 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		45 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
	мужские	53 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	20 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		60 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	женские	47 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		48 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		50 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	унисекс	50 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		51 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		57 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	детские	37 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		38 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		39 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0

Оправы корректирующих очков безободковые		40 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		41 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		42 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		43 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		44 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		45 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
	мужские	53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	20 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		58 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		60 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	женские	47 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		48 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		50 ± 0,2	14 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	унисекс	50 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		51 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		52 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		53 ± 0,2	16 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		54 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		55 ± 0,2	18 ± 0,2	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		56 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		57 ± 0,2	15 ± 0,2	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	детские	37 ± 0,2	12 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		38 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		39 ± 0,2	14 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	15 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		40 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		41 ± 0,2	16 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		42 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		43 ± 0,2	17 ± 0,2	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		44 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		45 ± 0,2	18 ± 0,2	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
Оправы корректирующих очков безободковые	мужские	Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0

		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	ЖЕНСКИЕ	Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	унисекс	Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	12,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	13,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	14,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	15,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	110 ± 1,0	16,0 ± 1,0
	детские	Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	6,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	7,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	8,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0
		Н/Д	Н/Д	90 ± 1,0	9,0 ± 1,0

На поверхности оправы не должно быть никаких острых краев и заусенцев, скопических выступов, царапин, пузырьков, следов от спайки. Заушники должны плавно вращаться вокруг оси, без заедания.

Оправы корригирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, безободковые и безободковые соответствуют нормам: ISO EN 12870.

Оправы корригирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, безободковые, безободковые выбираются с учетом антропометрической информации пациента.

3. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- индивидуальная непереносимость коррекции зрения при ношении очков;
- невозможность коррекции зрения при ношении очков.

4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оправы пластмассовые производятся из ацетата целлюлозы Parade 209389.

Оправы металлические, комбинированные и безободковые изготовлены из медно-никелевого сплава (Monel KA 500), наконечники заушников изготовлены из ацетата целлюлозы





Носовые упоры изготовлены из силикона LSR50.

Пальцеободковые сделаны из медно-никелевого сплава (Monel KA 500), наконечники

из ацетата целлюлозы Parade 209389, носовые упоры сделаны из силикона


нейлоновая леска сделана из нейлонового полимера Nilor.

Соответствуют требованиям биологической безопасности.

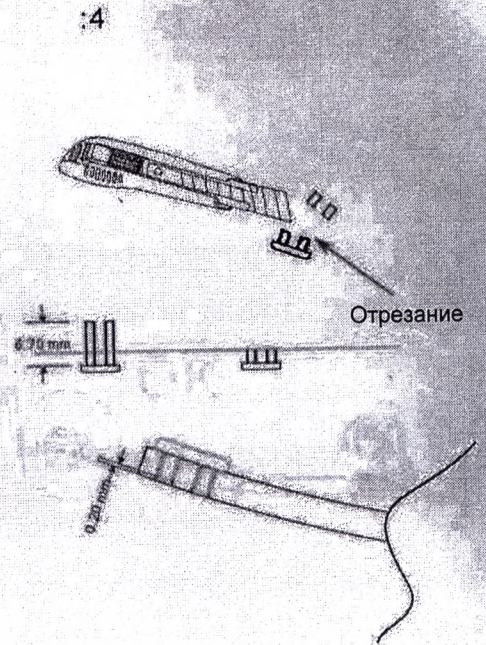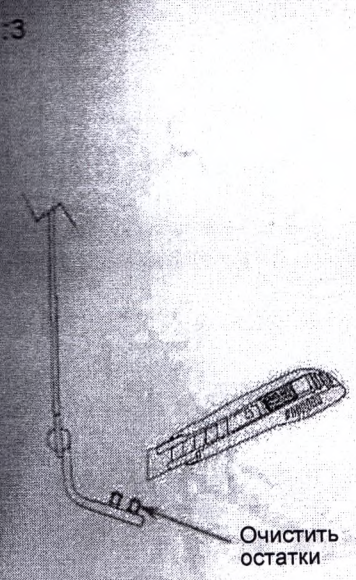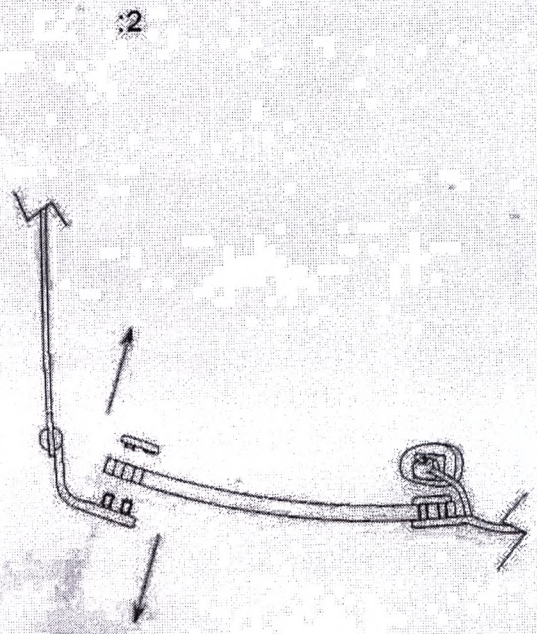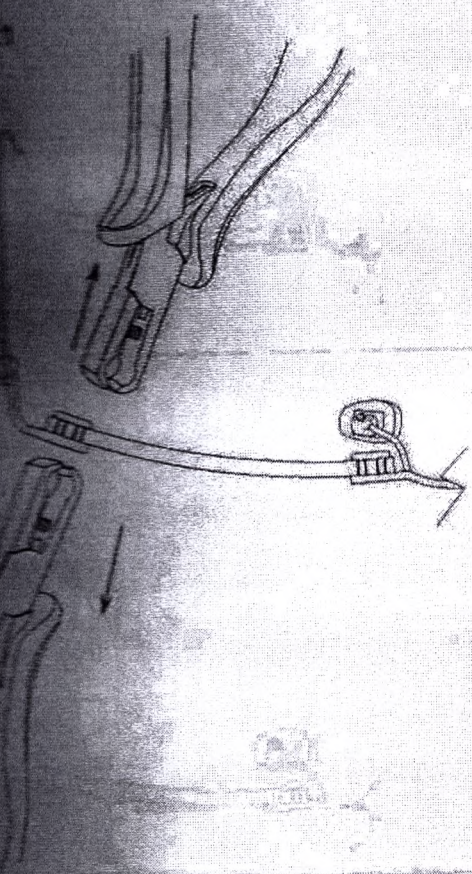


БОРКА ШАРНИРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ОПРАВЫ БЕЗОБОДКОВОЙ


5

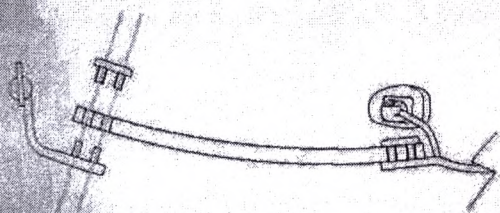


6

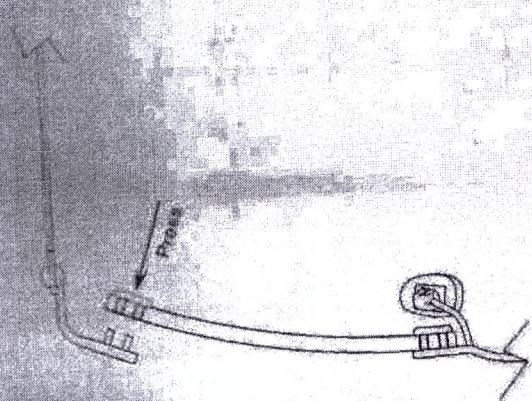


7

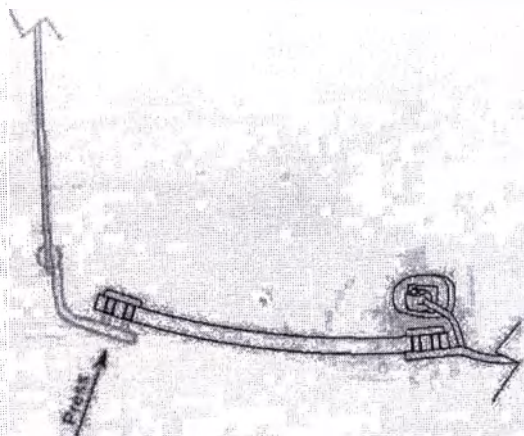


8

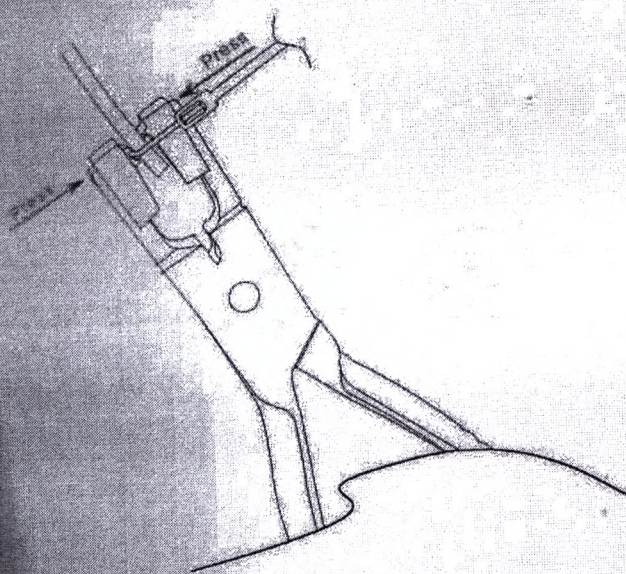

9

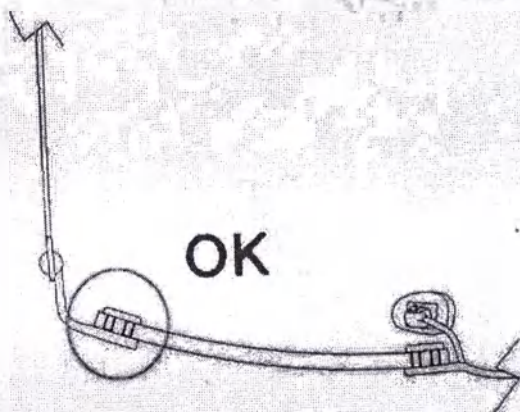

СБОРКА ШАРНИРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ОПРАВЫ БЕЗОБОДКОВОЙ

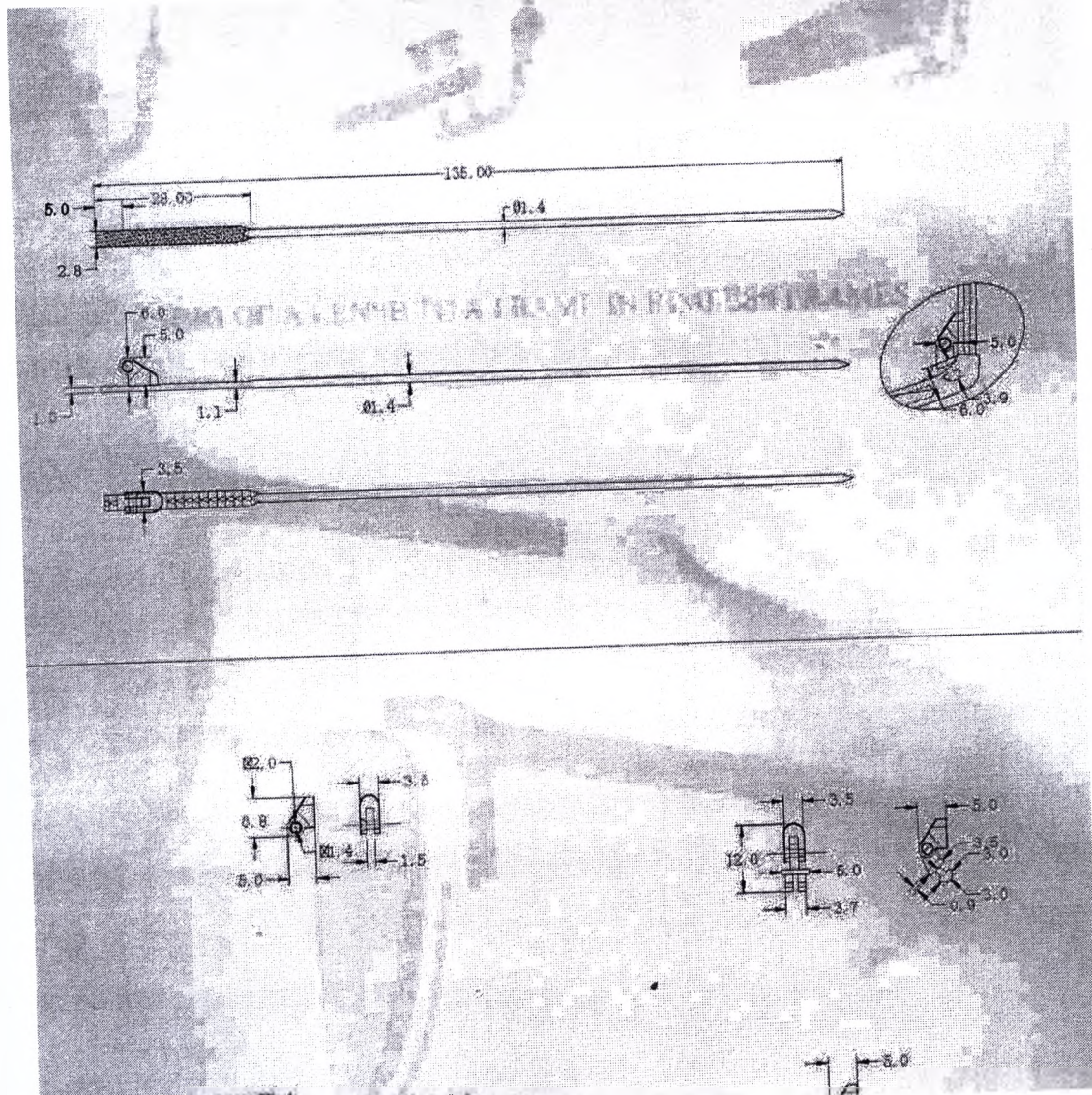

ДЕТАЛИ ШАРНИРНОГО СОЕДИНЕНИЯ


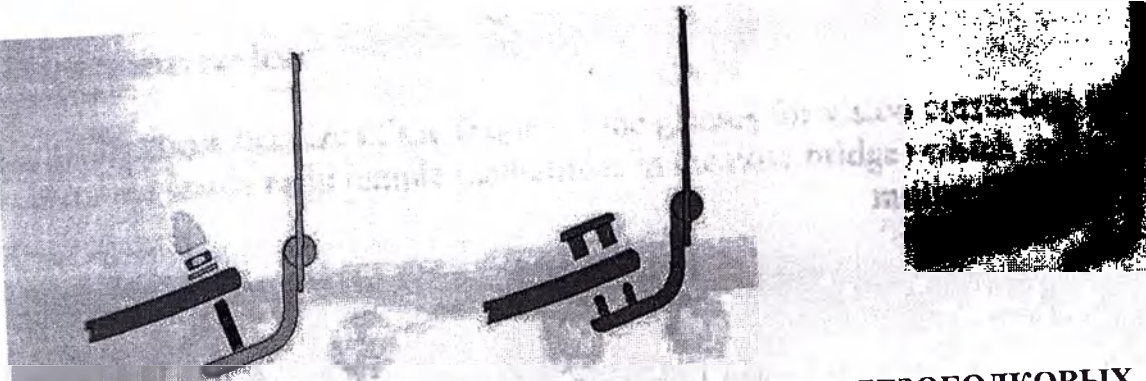


СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ЛИНЗЫ К ОПРАВЕ ДЛЯ ОПРАВ БЕЗОБОДКОВЫХ

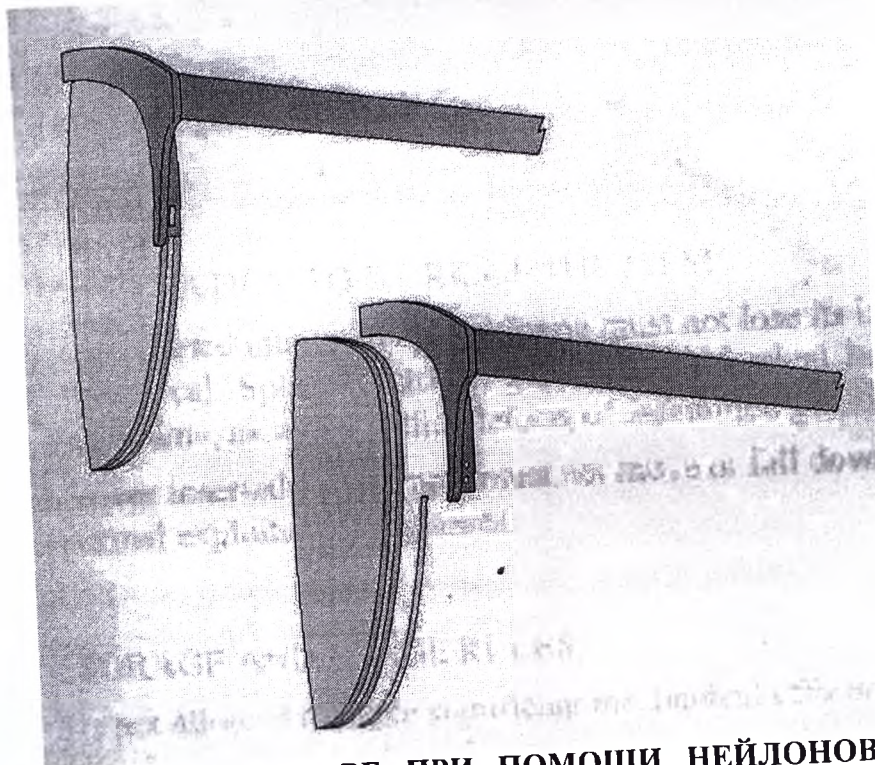


КРЕПЛЕНИЕ ЛИНЗЫ К ОПРАВЕ ПРИ ПОМОЩИ НЕЙЛОНОВОЙ ЛЕСКИ В ОПРАВЕ ПОЛУОБОДКОВОЙ

5. МАРКИРОВКА

Оправы корректирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые, изготовленные компанией «ЭЙНАР ИТАЛИЯ С.Р.Л.» маркируются на заушниках. Маркировка включает название коллекции и маркировку СЕ на правом заушнике. Технические параметры указываются на левом заушнике: горизонтальная ширина фиксируемой линзы (а), ширина мостика (b) и полная длина заушников; код модели; буква цветового кода.

Размеры оправ коррегирующих очков - металлических, пластмассовых, комбинированных, полубодковых, безободковых

Для проверки размера оправы коррегирующих очков три цифры напечатаны внутри правого заушника (иногда на мостике), которые означают (в миллиметрах):

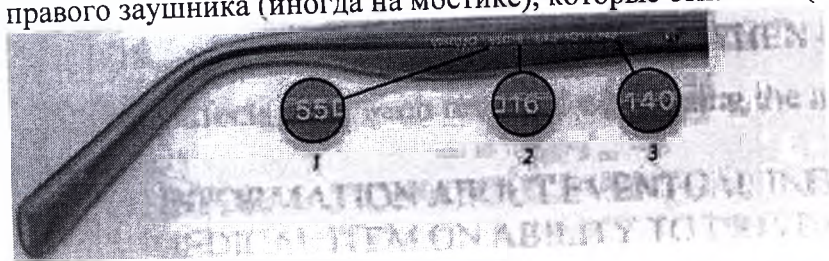

- 1 - размер для светопроема;
- 2 - ширина мостика;
- 3 - длина заушника.

6. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Оптическая оправа не должна терять первоначальной формы при установке в неё линз. Ободки должны быть симметричными. Трещины, царапины, зазоры между оптическими линзами и ободками головной части оправы, а также иные дефекты собранных очков недопустимы.

Оптические линзы, вставленные в оправу, не должны двигаться или выпадать из проемов оправы в ходе обычной эксплуатации очков.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- не разрешается прилагать значительные механические усилия в отношении оправы;
- оправа должна храниться в футляре или в другой упаковке, исключающей вероятность механического повреждения;
- общий средний срок службы оправы составляет не менее 3 лет;
- условия хранения: в отапливаемых помещениях, при температуре окружающей среды от +5 °C до +50 °C, при относительной влажности 80%.
- при хранении не допускается воздействие агрессивных веществ (кислот, щелочей) или органических растворителей или их паров.

8. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Оправы коррегирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полубодковые, безободковые используются во всех климатических зонах, в любое время дня и ночи.

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Осторожно используйте оправы корригирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые, когда занимаетесь спортом и делаете быстрые движения головой, прыжки, наклоны и удары.

10. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

При использовании медицинского изделия не было выявлено побочных эффектов.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МЕХАНИЗМАМИ

Оправы корригирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые обеспечивают возможность управлять транспортными средствами и механизмами для водителей, имеющих проблемы со зрением (если оправы используются для производства очков для коррекции зрения).

12. СТЕРИЛЬНОСТЬ

Не стерильный.

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Оправы корригирующих очков - металлические, пластмассовые, комбинированные, полуободковые, безободковые должны ремонтироваться в специальных лабораториях, обладающих лицензиями на производство, техническое обслуживание и ремонт.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок годности оправ: для пластмассовых и комбинированных оправ - 5 лет; для металлических оправ - 10 лет.

Полный срок службы оправ составляет не менее 3 лет при количестве движений заушников не более 50000.

15. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка оправ корригирующих очков - металлических, пластмассовых, комбинированных, полуободковых, безободковых может осуществляться любыми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, согласно правилам грузоперевозок, применимым для такого транспортного средства.

Оправы корригирующих очков должны транспортироваться при температуре окружающей среды от -45°C до +50°C и относительной влажности до 98%.

16. УТИЛИЗАЦИЯ

Оправы корригирующих очков должны утилизироваться также, как и бытовые отходы.

17. СЕРТИФИКАТЫ

Производитель установил и использует систему качества, регулирующую внутренними правилами. Данная система качества контролируется и актуализируется ежегодно.

18. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«ЭЙНАР ИТАЛИЯ С.Р.Л.» , юридический адрес: Виа Вал Галлина, 40-32010 Соверцене, Беллуно – Италия.
Тел. +39 0437-981713, электронный адрес: info@einaritalia.it

19. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО "МАРКОЛИН-РУС", юридический адрес: д.1, 8, Большой Чудов переулок, Москва, 119021 - Россия
Тел. +7 (499) 245-72-00

«ЭЙНАР ИТАЛИЯ С.Р.Л.»

Виа Вал Галлина, 40
32010 Соверцене (Беллуно)
Номер ИНН 01134430253

Генеральный директор
Стефано Кинниччи
«ЭЙНАР ИТАЛИЯ С.Р.Л.»
Соверцене, 07 апреля 2017 г.

<подпись>

Подпись и штамп

Торгово-
промышленная палата
Тревизо - Беллуно

Торгово-промышленная палата
Тревизо – Беллуно

Освобождено от уплаты
гербового сбора согласно
Ст. 15 Декрета Президента
Республики Италия №641/1972

Настоящим заверяется подпись
СТЕФАНО КАННИЧЧИ,
образец которой хранится в документах
указанной
Торгово-промышленной палаты.

Таблица приложения В

От имени ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
(Уполномоченное должностное лицо)
Госслужащая
ЛОРЕДАНА ДЕ ТОФФОЛЬ
<подпись>

Печать: /Торгово-
промышленная, ремесленная и
сельскохозяйственная палата *
Тревизо – Беллуно/

ГЕРБОВАЯ МАРКА:

Министерство экономики и финансов 16,00 евро
Агентство по налогам и сборам шестнадцать/00
00029591 00008786 W10V3001
00086288 11/05/2017 09:24:04
4578-00088 DCC71FD175F72E39
Идентификационный номер: 01160539855165

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 05 октября 1961 г.)

1. Страна: Италия
- Настоящий официальный документ
2. подписала **ЛОРЕДАНА ДЕ ТОФФОЛЬ**
3. действующая в качестве **уполномоченного сотрудника**
4. скреплен печатью **Торгово-промышленной палаты Тревизо-Беллуно**

УДОСТОВЕРЕНО

5. в г. Беллуно
6. **11 мая 2017**
7. **Префектурой Беллуно**
8. за № **1083/2017**
9. печать /штамп: /Префектура Беллуно/
10. уполномоченный сотрудник:
Административный служащий
(Д-р Карло Де Негри) <подпись>

Беллуно, 11/05/2017.

Перевод выполнил переводчик
Руленкова Олеся Александровна

Российская Федерация.

Город Москва. Девятнадцатого мая две тысячи семнадцатого года.

Я, Акимова Алла Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Руленковой Олесеи Александровны.


Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за

№ Р. 865


Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00

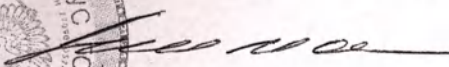 А.А. Акимова

Прошнуровано, пронумеровано и

Скреплено печатью 27 листа (-ов)

Нотариус города Москвы

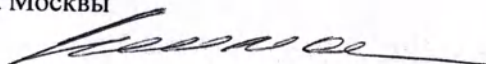

Российская Федерация.

Город Москва,

Личного августа 2009 года

Я, Акимов Алла Александровна, нотариус города Москвы, свидетельствую
верность копии с представленного мне

Зарегистрировано в реестре: № 9-2844

Всего уплачено пошлины (по тарифу)

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера:

А. А. Акимов



Всего проштудовано
прошумеровано и скреплено
печатью 28
Нотариус Акимов А.А.

